
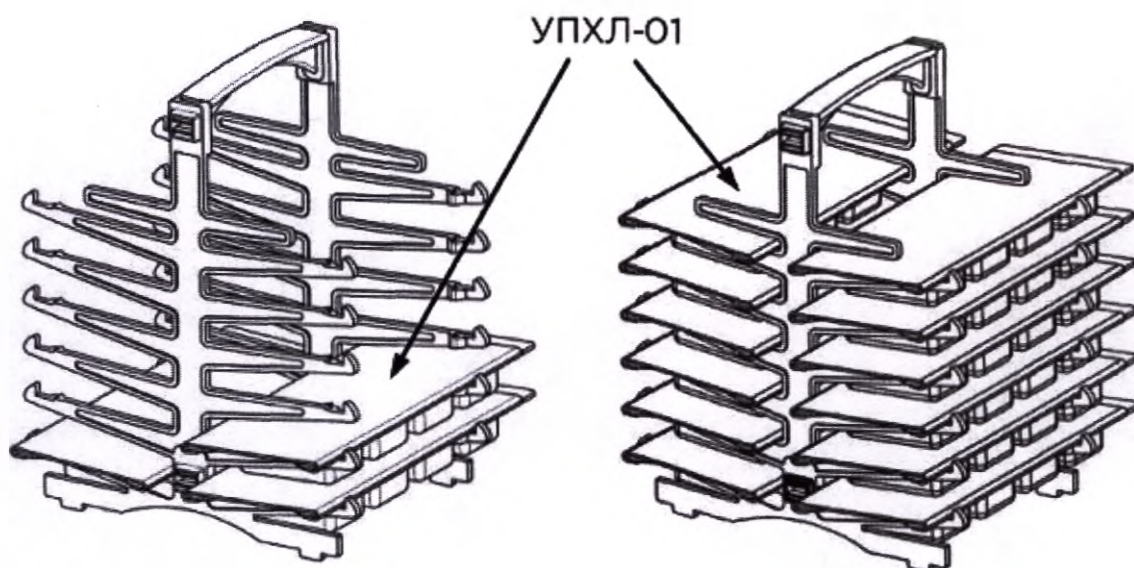


**Инструкция по сборке поддона-укладки
для изделия УПХЛ-01-«Елат»
ГИКС.735226.114ИП**

Комплект поставки поддона-укладки:

- Стойка - 2 шт.
- Ручка - 2 шт.

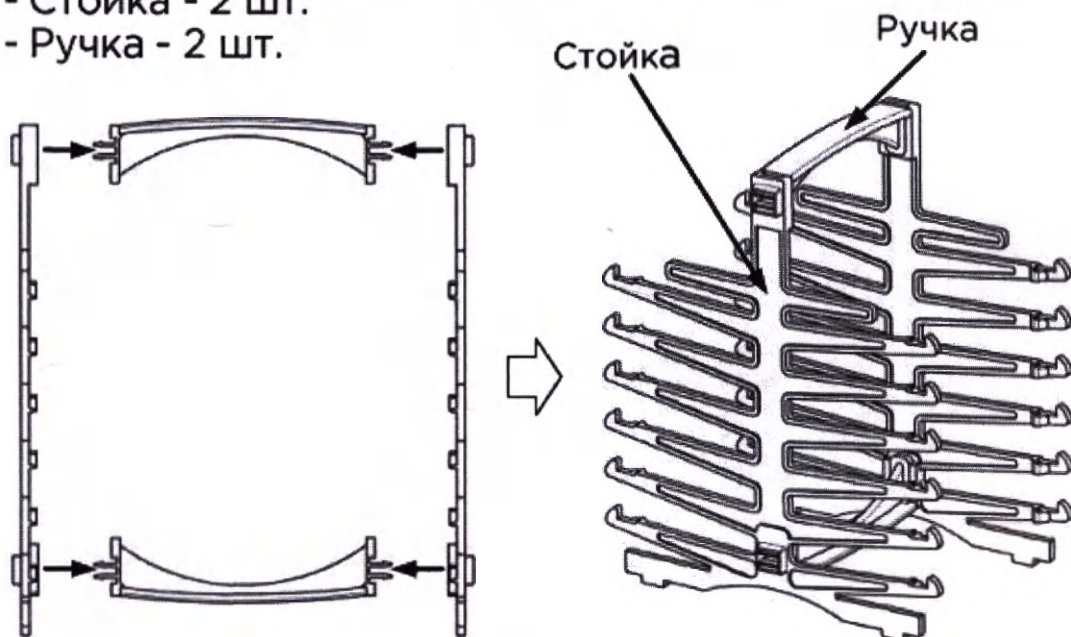

ЕЛАМЕД

ОМ № 23.114.09
18.08.2022

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Телефон: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com Сайт: www.elamed.com

КОПИЯ
ВЕРНА



Иванов И.И.
17.10.2022

**Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств
«УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005
Руководство по эксплуатации ГИКС.942849.107РЭ**

Назначение: Укладка-пенал предназначена для хранения таблеток в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

**Рис.1 Общий вид
Укладки-пенала**



Комплект поставки:

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Этикетка

Технические характеристики:

Габаритные размеры укладки-пенала - 160х64х19 ±10% мм.
Масса не более 50 гр.

Календарный срок службы укладки-пенала не менее 2 лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерием предельного состояния укладки-пенала является наличие на поверхности ее частей трещин, раковин, вздутий, расслоений.

Укладка-пенал применяется в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С;
- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 °С, не более 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Правила эксплуатации укладки-пенала

К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.

- Перед первым применением и после каждого последующего применения продезинфицируйте укладку-пенал. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-ПЗ: 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ 9398-031-00203306.

- К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.

- Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия на укладку-пенал не более 50 °С.

- При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке.

Транспортирование и хранение

Укладка-пенал может транспортироваться под навесами при температуре от -50 до +50 °С и влажности окружающего воздуха, при температуре плюс 15 °С, не более 75%, при температуре плюс 25 °С, не более 100%. Хранение осуществляется в закрытых и других помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования, при температуре от -50 до +40 °С и влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 15 °С, не более 75%, при температуре плюс 25 °С, не более 98%.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание укладки-пенала сводится к ее профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений ее составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация). При обнаружении дефектов просим обратиться к предприятию-изготовителю по адресу, указанному в конце руководства по эксплуатации или по телефону горячей линии 8-800-200-01-13.

Утилизация

Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня упаковки.

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847 от 23.11.2016г.

ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Кашиновский
р-н, р.п. Елатома, ул. Янина, 25
Телефон: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com Сайт: lpu.elamed.com

ОМ № 23.379.04
18.08.2022г.

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Г.Н.
18.10.2022