


НАНОПЛАСТ[®] ФОРТЕ[®]

nanoplast forte[®]

Лечебный
обезболивающий
противовоспалительный
пластырь

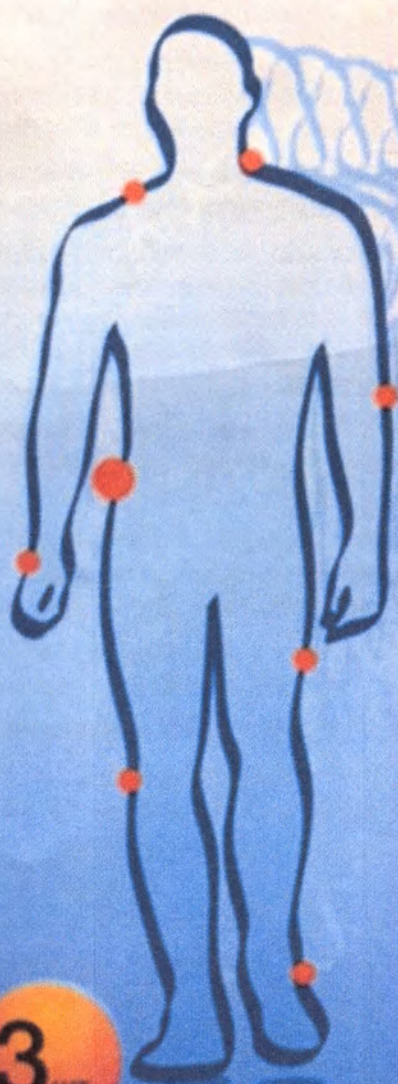

Быстрый
эффект

Длительное
действие

Удобство
применения

3
шт

Размеры 3x8 см, 7x7 см, 7x9 см, 7,5x9,5 см, 8x10 см, 9x12 см, 9,5x12,5 см, 11x16 см, 13,5x13,5 см, 12x18 см

НАНОПЛАСТ[®] ФОРТЕ[®]

nanoplast forte[®]

Лечебный обезболивающий и противовоспалительный пластырь применяется при заболеваниях суставов, позвоночника, мышц и связок, а также при закрытых травмах (в том числе спортивных): ушибах, растяжениях связок и мышц, вывихах суставов, кровоподтеках и гематомах мягких тканей.

В отличие от мазей, кремов и гелей, пластырь не оставляет следов на коже и одежде, снимается легко и безболезненно, фиксирующий материал имеет телесный цвет. Использование пластыря удобно и комфортно, не ограничивает движений, не меняет привычный образ жизни!

Состав: магнитный порошок из редкоземельных металлов, нанопорошок-производитель инфракрасного излучения в далекой инфракрасной области спектра.

Сочетанное воздействие инфракрасного (теплого) излучения и магнитного поля приводит к улучшению местного (локального) крово- и лимфообращения, уменьшению застоя крови, отека и боли, улучшению венозного оттока. Улучшает местный метаболизм, расслабляет мышцы и связки. Способствует восстановлению функции опорно-двигательного аппарата, уменьшению гематом и кровоподтеков при травмах мягких тканей и суставов.

Показания к применению (подробно см. инструкцию внутри упаковки): артриты, артрозы, остеоартроз, боли в шее, спине, пояснице, ушибы и растяжения связок и мышц, кровоподтеки и гематомы мягких тканей, спортивные травмы.

Способ применения: наружно! Зафиксировать пластырь на сухом участке кожи в беспокоящей области до 12 часов. Следующий пластырь наклеить не ранее, чем через 6 часов. Пластырь одноразовый. Не подлежит повторному использованию!

Побочные действия: редко возможны аллергические реакции на отдельные компоненты пластыря на коже людей, подверженных аллергии.

Противопоказания: беременность, открытая рана.

В упаковке: 3 штуки, 7х9 см, инструкция по применению.
Отпуск без рецепта врача. Срок годности: 5 лет.

Производство «Гуйчжоу Мяою Фармасыютил Ко., Лтд»,
(Guizhou Miao Yao Pharmaceutical Co., Ltd), КНР
Р.У. № ФСЗ 2008/03447 от 19.01.2009 г.

Представительство в России: ООО «НаноТек Фарма»,
Москва, пр-кт Вернадского, 29 – 1307,
e-mail: info@nanotechpharma.ru
www.nanoplast-forte.ru



NanoTech Pharma



Серия №
Дата изготовления:

14854 637 65
03-2015

14854 637 65

Размеры 3х8 см, 7х7 см, 7х9 см, 7,5х9,5 см, 8х10 см, 9х12 см, 9,5х12,5 см, 11х16 см, 13,5х13,5 см, 12х18 см

Пластырь лечебный обезболивающий противовоспалительный НАНОПЛАСТ форте (NANOPLAST forte)




Размеры 3x8 см, 7x7 см, 7x9 см, 7,5x9,5 см, 8x10 см, 9x12 см, 9,5x12,5 см, 11x16 см, 13,5x13,5 см, 12x18 см

Пластырь лечебный обезболивающий противовоспалительный НАНОПЛАСТ форте (NANOPLAST forte)



Размеры 3х8 см, 7х7 см, 7х9 см, 7,5х9,5 см, 8х10 см, 9х12 см, 9,5х12,5 см, 11х16 см, 13,5х13,5 см, 12х18 см

пластырь лечебный обезболивающий противовоспалительный НАНОПЛАСТ форте (NANOPLAST forte)

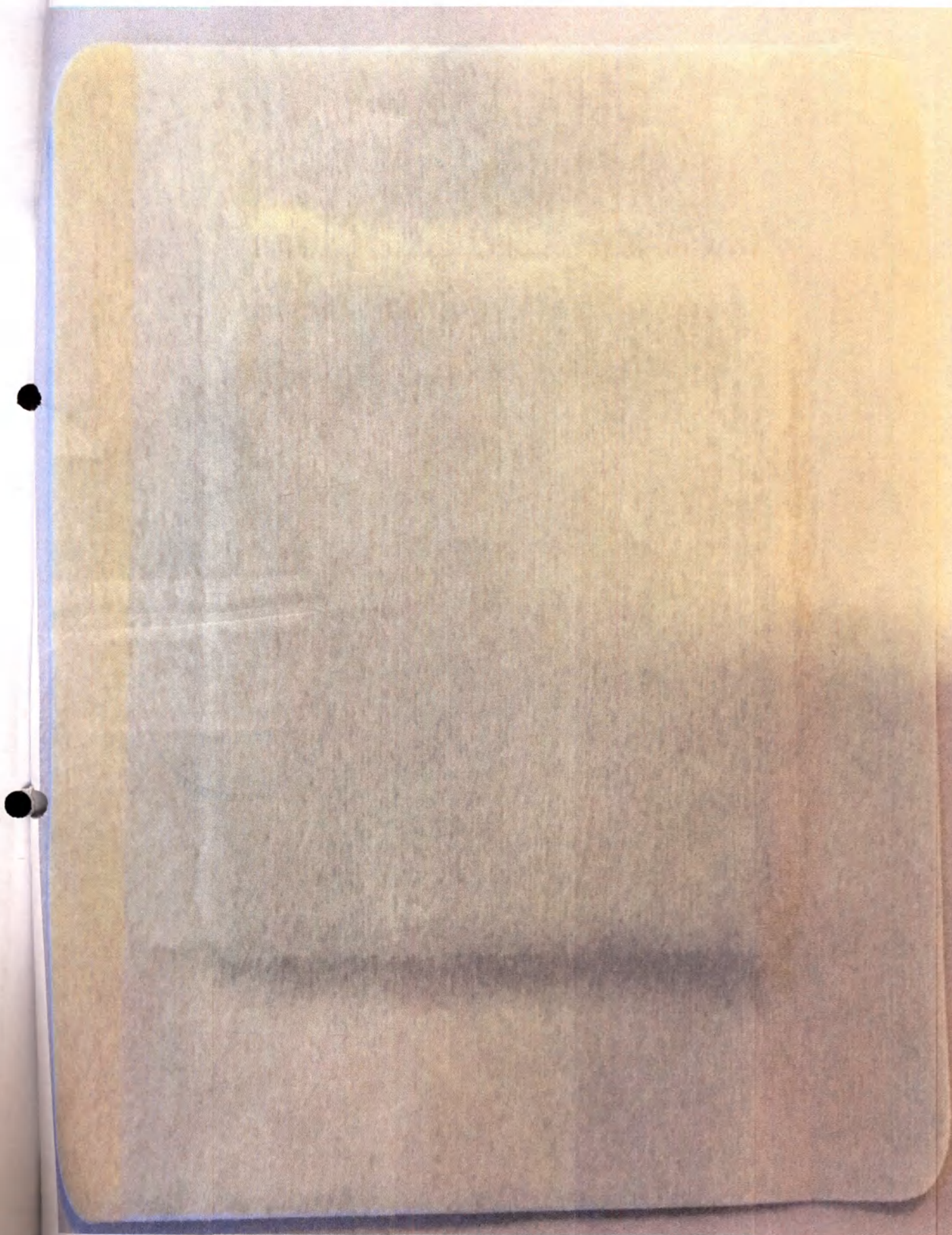

Размеры 3x8 см, 7x7 см, 7x9 см, 7,5x9,5 см, 8x10 см, 9x12 см, 9,5x12,5 см, 11x16 см, 13,5x13,5 см, 12x18 см

Прошито и пронумеровано,	
и скреплено печатью	
листа	5
Дата: 12.05.2017 г.	

