

45
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ШУСТЕР ФАРМАСЬЮТИКЛ»

«ШУСТЕР
ФАРМАСЬЮТИКЛ»

А.Б. Шустер

«20» апреля 2013 г.

М.п.

Руководство по эксплуатации

АППЛИКАТОР С ИГОЛЬЧАТЫМИ МОДУЛЯМИ **«КАПИЛЛЯРОМОДЕРАТОР» по ТУ 9398-002-85806621-2013.**

Аппликатор с игольчатыми модулями «Капилляромодератор» по ТУ 9398-002-85806621-2013 предназначен для проведения игольчатого массажа при головной боли, болях в суставах и мышцах, в том числе при радикулите и остеохондрозе; усталости ног, для улучшения местного кровообращения, для восстановления подвижности суставов, повышения половой активности, для уменьшения жировых отложений и целлюлита, уменьшения умственного и физического переутомления.

Аппликатор применяется в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных центрах, а также в повседневной жизни.

Аппликатор представляет собой набор игольчатых модулей (далее - модули), закрепленных на плотной основе с помощью специальных кнопок.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1) лечь на аппликатор спиной при болезненных ощущениях в позвоночнике, мышцах спины, при общей усталости на 1-15 мин;
- 2) положить на зону рефлекторного воздействия и прижать к телу (в пределах болевой переносимости) на 1-15 минут
- 3) встать на аппликатор ногами или поставить на аппликатор ступни ног сидя на стуле в течение 1-10 минут
- 4) В ряде случаев (по желанию) аппликатор можно носить длительное время, прижимая его эластичным бинтом, поясом или полотенцем.

Время и сила воздействия являются индивидуальными для каждого человека и определяются опытным путем. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- инфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний;
- тромбоз, варикозное расширение вен;
- острые хирургические состояния;
- нарушения целостности кожных покровов: раны, ожоги, обморожения;
- онкологические заболевания;
- доброкачественные и злокачественные опухоли;
- заболевания крови;
- беременность.

ПРИМЕНЕНИЕ:

при головной боли
(зоны 1, 2)

при болях в суставах и мышцах,
в том числе при радикулите и
остеохондрозе
(зоны 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14)

при усталости ног
(зоны 6, 7, 8)


для улучшения местного
кровотока
(зоны 12, 14)

для восстановления
подвижности суставов
(зоны 9, 10, 11)

для повышения
половой активности
(зона 13)

для уменьшения жировых
отложений и целлюлита
(зоны 4, 5)

для уменьшения умственного
и физического переутомления
(зоны 1, 2)

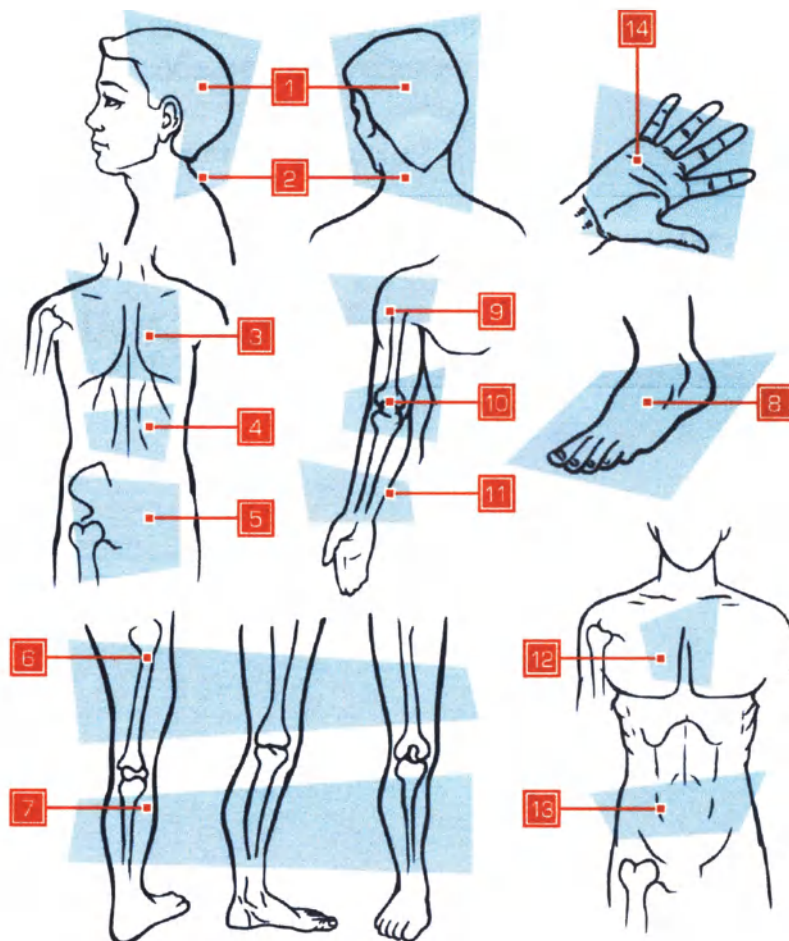**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Набор игольчатых модулей (60 шт. или 60*2 шт.), закрепленных на плотной полиэтиленовой основе с помощью специальных кнопок.

Габаритные размеры аппликатора, не более:

160 x 400±3мм

Масса аппликатора: 90,0±2,0 г.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, исключающим попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от 0 до +40°C в местах, недоступных для детей.

ДЕЗИНФЕКЦИЮ аппликатора проводят путем обработки нейтральными растворами моющих средств или раствором детского мыла.

УТИЛИЗАЦИЮ аппликаторов следует проводить как утилизацию отходов класса А по СанПин 2.1.7.2790 или V класса по Федеральному Закону № 89-ФЗ, как производственного или бытового мусора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- аппликатор 1 шт. или 2 шт.;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие аппликатора требованиям технических условий ТУ 9398-002-85806621-2013 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок службы – 12 месяцев с момента продажи.

Срок хранения – не более 3-х лет.

В течение гарантийного срока ООО «ШУСТЕР ФАРМАСЬЮТИКЛ» принимает претензии по качеству аппликатора.

Адрес: 109382, г.Москва, ул.Нижние Поля, д. 31, строение 1, 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7 телефон: +7 (495) 225-34-13, e-mail: shuster-pharm@yandex.ru

Главный инженер

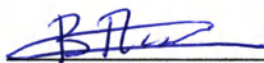

Плотников В. П.

Всего прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью 3 листов.

