

КОД ОКПД 2 32.50.22.129


«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ЛидерПолимер»

Управляющий - индивидуальный предприниматель

Гацкан Олег Владимирович

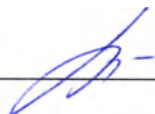


"19" мая 2017 г.

Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»

по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Назначение руководство пользователя.....	3
1.2 Требуемый уровень подготовки персонала.....	3
2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
3 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
3.1 Наименование изделия.....	3
3.2 Назначение.....	7
3.3 Область применения.....	7
3.4 Описание массажных модулей.....	7
4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	15
5 МАРКИРОВКА.....	19
6 ПОКАЗАНИЯ.....	20
7 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.....	21
8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	21
9 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ.....	24
10 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.....	27
11 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	27
12 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.....	27
13 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	27
14 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	27
15 УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ.....	28
16 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	28
17 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.....	28
18 АДРЕСА МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	42

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение руководство пользователя

Настоящее руководство пользователя по ГОСТ 2.601 распространяется на **Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ» по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017** (далее по тексту - изделие) и содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик, указания мер безопасности при эксплуатации изделия, а также противопоказания к использованию, порядок работы. Руководство пользователя предназначено для потребителей изделия.

1.2 Требуемый уровень подготовки персонала

К использованию изделия допускаются лица без специальной подготовки, предварительно изучившие руководство пользователя и паспорт изделия.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

2.2 Изделие применяют как для самостоятельных занятий ЛФК по индивидуальной программе, так и в группе с инструктором (медицинским работником).

3 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Наименование изделия

Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ» по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017 в вариантах исполнения:

МИКС «Ёжики», МИКС «Первые Шаги», МИКС «Лес», МИКС «Море», МИКС «Морские Камни», МИКС «Универсальный», МИКС «Саванна», МИКС «Тропа Здоровья», Комплект «Жёсткие Кактусы», Комплект «Мягкие Кактусы», Комплект «Жёсткие Ёжики», Комплект «Мягкие Ёжики», Комплект «Жёсткая Трава», Комплект «Жёсткие Шипы», Комплект «Жёсткие Шишки», Комплект «Мягкие Шишки», Комплект «Мягкие Морские Камни», Комплект «Жёсткие Морские Камни», Комплект «Мягкая Трава», Комплект «Галька», Комплект «Подсолнух», Комплект «Бабочка», Комплект «Морское Дно», Комплект «Морской Риф», Комплект «Океан», Комплект «Морская Волна».

1) МИКС «Ёжики» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Кактусы» - 2 шт.
2. Модуль «Мягкие Кактусы» - 2 шт.
3. Модуль «Жёсткие Ёжики» - 2 шт.
4. Модуль «Мягкие Ёжики» - 2 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

2) МИКС «Лес» в составе:

1. Модуль «Жёсткая Трава» - 2 шт.

2. Модуль «Жёсткие Шипы» - 2 шт.
3. Модуль «Жёсткие Шишки» - 2 шт.
4. Модуль «Мягкие Шишки» - 2 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

3) МИКС «Морские Камни» в составе:

1. Модуль «Мягкие Морские Камни» - 4 шт.
2. Модуль «Жёсткие Морские Камни» - 4 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

4) МИКС «Первые Шаги» в составе:

1. Модуль «Мягкая Трава» - 2 шт.
2. Модуль «Галька» - 2 шт.
3. Модуль «Подсолнух» - 2 шт.
4. Модуль «Бабочка» - 2 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

5) МИКС «Универсальный» в составе:

1. Модуль «Жёсткая Трава» - 2шт.
2. Модуль «Жёсткие Шипы» - 2 шт.
3. Модуль «Жёсткие Шишки» - 2 шт.
4. Модуль «Мягкие Ёжики» - 2 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

6) МИКС «Море» в составе:

1. Модуль «Морское Дно» - 2шт.
2. Модуль «Морской Риф» - 2 шт.
3. Модуль «Океан» - 2 шт.
4. Модуль «Морская Волна» - 2 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

7) МИКС «Тропа Здоровья» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Кактусы» - 4 шт.
2. Модуль «Жёсткие Ёжики» - 4 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

8) МИКС «Саванна» в составе:

1. Модуль «Мягкие Морские Камни» - 2шт.
2. Модуль «Мягкие Кактусы» - 2 шт.
3. Модуль «Жёсткие Морские камни» - 2 шт.

4. Модуль «Мягкие Ёжики» - 2 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

9) Комплект «Жёсткие Кактусы» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Кактусы» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

10) Комплект «Мягкие Кактусы» в составе:

1. Модуль «Мягкие Кактусы» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

11) Комплект «Жёсткие Ёжики» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Ёжики» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

12) Комплект «Мягкие Ёжики» в составе:

1. Модуль «Мягкие Ёжики» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

13) Комплект «Жёсткая Трава» в составе:

1. Модуль «Жёсткая Трава» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

14) Комплект «Жёсткие Шипы» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Шипы» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

15) Комплект «Жёсткие Шишки» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Шишки» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

16) Комплект «Мягкие Шишки» в составе:

1. Модуль «Мягкие Шишки» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

17) Комплект «Мягкие Морские Камни» в составе:

1. Модуль «Мягкие Морские Камни» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

18) Комплект «Жёсткие Морские Камни» в составе:

1. Модуль «Жёсткие Морские Камни» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

19) Комплект «Мягкая Трава» в составе:

1. Модуль «Мягкая Трава» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

20) Комплект «Галька» в составе:

1. Модуль «Галька» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

21) Комплект «Подсолнух» в составе:

1. Модуль «Подсолнух» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

22) Комплект «Бабочка» в составе:

1. Модуль «Бабочка» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

23) Комплект «Морское дно» в составе:

1. Модуль «Морское дно» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

24) Комплект «Морской Риф» в составе:

1. Модуль «Морской Риф» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

25) Комплект «Океан» в составе:

1. Модуль «Океан» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

26) Комплект «Морская Волна» в составе:

1. Модуль «Морская Волна» - 8 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство пользователя – 1 шт.

2. Паспорт – 1 шт.

3.2 Назначение: изделие предназначено для точечного массажа рефлекторных зон стопы, лечения и профилактики плоскостопия, укрепления мышечно-связочного аппарата стопы и голени.

3.3 Область применения: лечебная физическая культура (ЛФК).

Изделие предназначено для применения в домашних условиях, детских дошкольных учреждениях, дневных стационарах, санитарно-профилактических и других медицинских учреждениях. Допускается применение изделия на открытом воздухе в летний период при наличии в месте применения ровной твердой площадки, размер которой превышает размеры изделия.

Кратность применения медицинского изделия: Изделие многократного применения.

3.4 Описание массажных модулей

Изделие представляет собой набор прямоугольных рельефных пластин (массажных модулей) с крепежными элементами по периметру типа «ласточкин хвост», для соединения модулей между собой по принципу пазлов (паз – выступ). Из модулей на месте применения формируется рельефное массажное напольное покрытие в виде ковра или дорожки. Изделие не стерильно. Изделие многократного применения.

Модуль «**Жёсткая Трава**» - поверхность модуля имитирует газонную травку на холмике. Уникальный рельеф модуля с полусферическим подъемом в центре специально разработан для профилактики и коррекции вальгусной постановки стоп, а также массажа стопы в продольном и поперечном направлении. Рабочая поверхность идеально повторяет свод здоровой стопы.

Модуль «**Мягкая Трава**» - поверхность модуля имитирует молодую газонную травку на лужайке. Травинки, выполненные из мягкого материала, оказывают аккуратное стимулирующее воздействие на акупунктурные точки стопы. Модуль со сферическим подъемом в центре развивает координацию и равновесие за счет ходьбы по ограниченной и неровной поверхности.

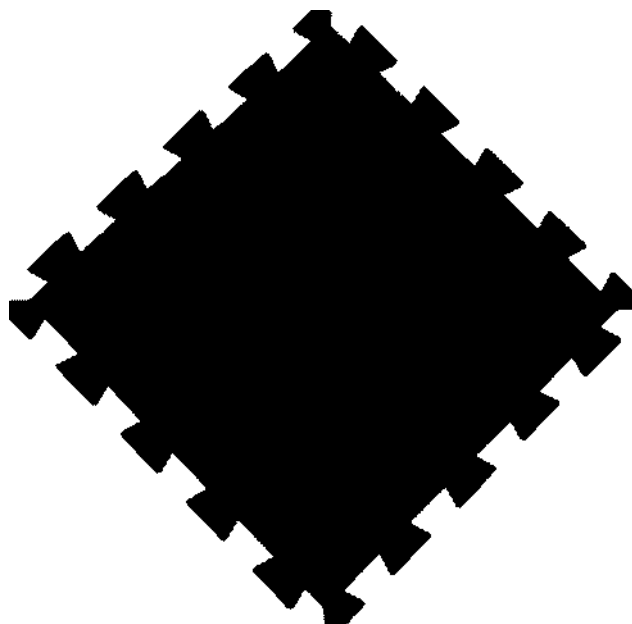


Рисунок 1 - Модуль «Жёсткая Трава»/ Модуль «Мягкая Трава»

Модуль «**Жёсткие Шипы**» — поверхность модуля покрыта шипами, расположенными по кругу и постепенно увеличивающимися по высоте от края коврика к центру. Рельеф коврика напоминает полусферу и позволяет массировать стопы с различной степенью интенсивности. Модуль направлен на профилактику и коррекцию вальгусной постановки стоп, формирование опорного аппарата с сохранением равновесия.

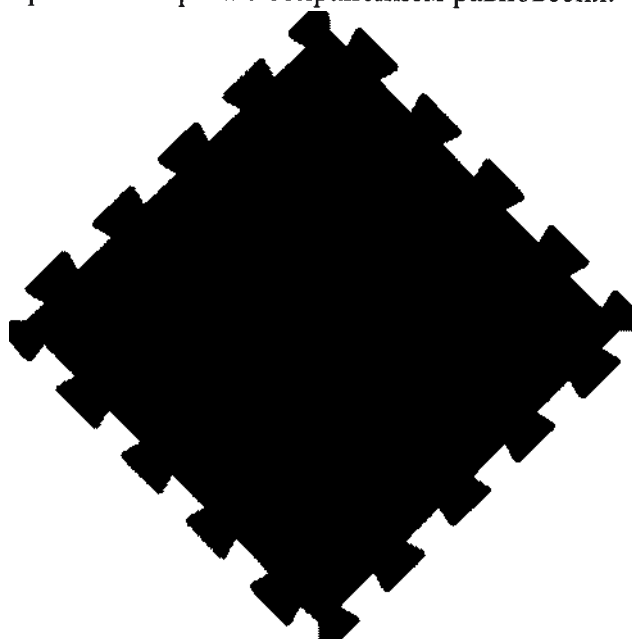


Рисунок 2 - Модуль «Жёсткие Шипы»

Модуль «**Жёсткие Шишки**» - поверхность модуля покрыта крупными массажными элементами, которые максимально схожи с лесной шишкой. Умеренно жесткая, не эластичная поверхность шишек и резкие перепады между элементами коврика способствуют лечению и профилактике плоскостопия за счет стимуляции подошвенных мышц, обеспечивают глубокий точечный массаж подошвенной поверхности.

Модуль «**Мягкие Шишки**» - массажные элементы на поверхности модуля максимально схожи с лесной шишкой. Мягкая пружинящая поверхность совместно чередованием высоты элементов улучшают кровообращение в области стопы и нижних конечностей,

обеспечивают деликатный массаж всей подошвенной поверхности, способствуют профилактике и коррекции варусной и вальгусной постановки стоп.

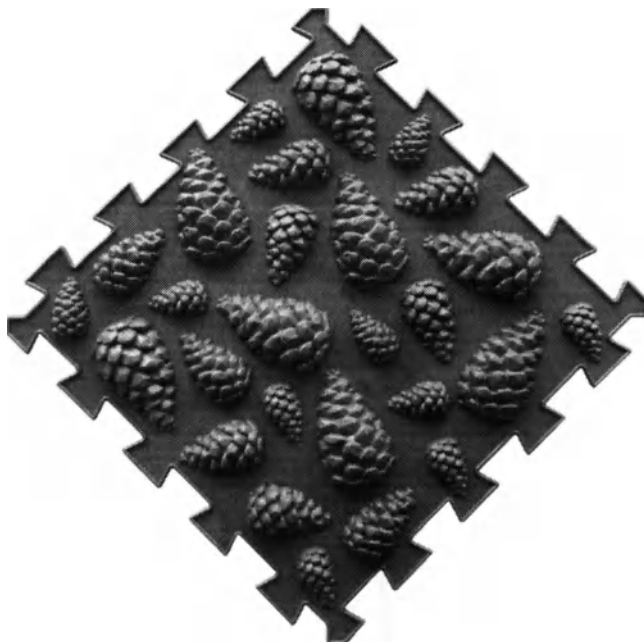


Рисунок 3 - Модуль «Жёсткие Шишки»/ Модуль «Мягкие Шишки»

Модуль «Жесткие Ёжики» - поверхность модуля состоит из девяти маленьких бугорков (полусфер), покрытых невысокими иголочками. Благодаря этому рельефу происходит точечная стимуляция всех рефлексогенных зон стопы. Под воздействием маленьких сфер и иголочек происходит непроизвольное сокращение мышц стопы, способствующее профилактике и лечению плоскостопия, снятию усталости ног после статических или динамических нагрузок.

Модуль «Мягкие Ёжики» - поверхность модуля покрыта иголочками, которые расположены на девяти полусферах. Коврик предназначен для проведения расслабляющего массажа стоп детей и взрослых. Терапевтический эффект достигается за счет воздействия стилизованных иголочек на поверхность кожи по принципу акупунктуры и точечного массажа.

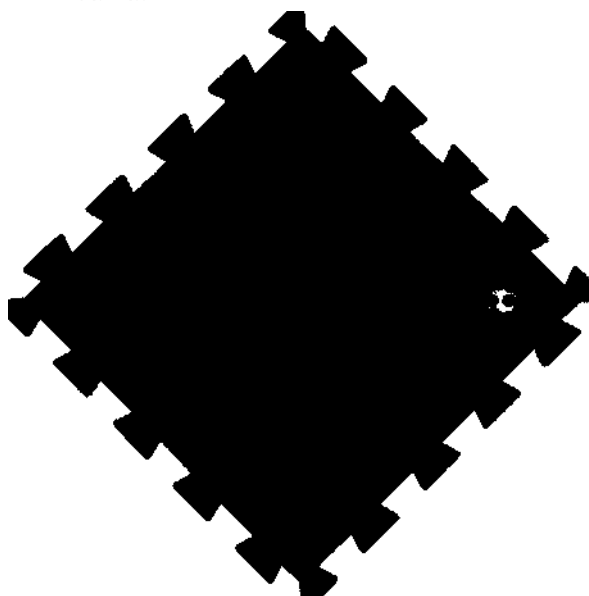


Рисунок 4 - Модуль «Жесткие Ёжики»/ Модуль «Мягкие Ёжики»

Модуль **«Жёсткие Кактусы»** - поверхность модуля покрыта жесткими иголочками разной высоты и размера. Коврик идеально подходит для массажа подошвенной поверхности с целью профилактики и лечения плоскостопия, развитию тактильных ощущений, укреплению нервной системы и снятия усталости и отеков у детей и взрослых. Модуль **«Мягкие Кактусы»** - поверхность модуля покрыта мягкими иголочками разной высоты и размера, что позволяет массировать стопы с различной интенсивностью. Массажный коврик обеспечивает очень нежное массирование — рекомендуется тем, у кого очень чувствительная кожа или в период реабилитации для профилактики статической и венозной недостаточности нижних конечностей.

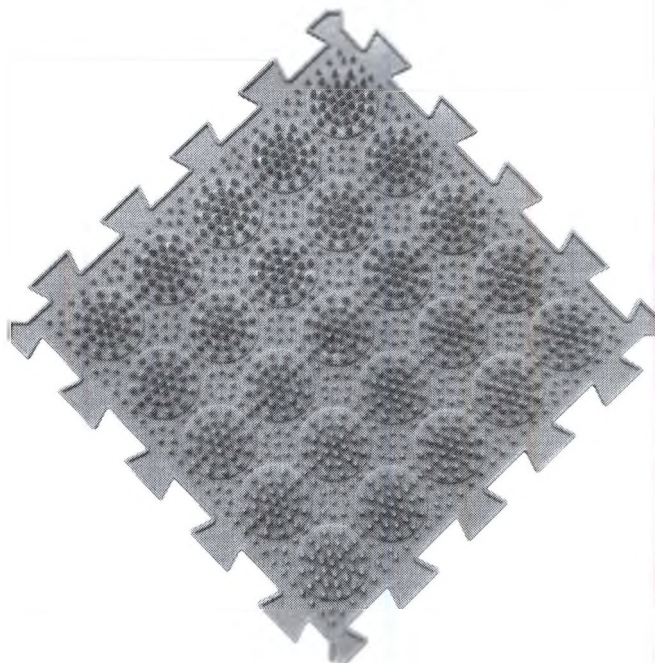


Рисунок 5 - Модуль **«Жёсткие Кактусы»**/ Модуль **«Мягкие Кактусы»**

Модуль **«Жёсткие Морские Камни»** - поверхность коврика состоит из камней разного диаметра и высоты, покрытых маленькими пупырышками. Жесткая поверхность модуля точно прорабатывает всю поверхность стопы, улучшает кровообращение в области стопы и нижних конечностей, способствует профилактике и лечению плоскостопия и укреплению мышц ног.

Модуль **«Мягкие Морские Камни»** - поверхность коврика состоит из мягких полых камней разного размера, покрытых мелкими пупырышками. Рельеф коврика воздействует точно на все рецепторы стопы. Пружинящая поверхность с мелкоточечным воздействием способствует повышению иммунитета за счет воздействия на рефлексогенные зоны стопы, улучшению кровообращения в области стопы и нижних конечностей.

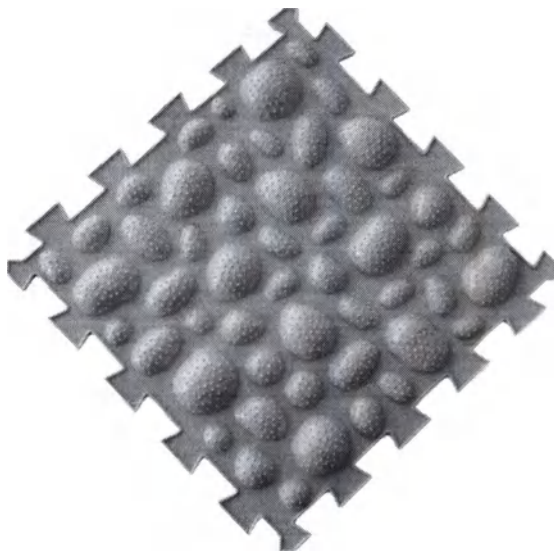


Рисунок 6 - Модуль «Жёсткие Морские Камни»/ Модуль «Мягкие Морские Камни»

Модуль «Галька» - поверхность модуля покрыта умеренно жесткими гладкими камешками, часть которых имитирует выпуклые следы детских ножек. Приятная пружинящая поверхность с крупными массажными элементами предназначена для глубокой стимуляции подошвенной поверхности, улучшению кровообращения в области стопы и нижних конечностей и растяжению задней поверхности голени.



Рисунок 7 - Модуль «Галька»

Модуль «Подсолнух» - поверхность модуля представляет собой сочетание мягких травинок по периметру коврика и рисунка в виде подсолнуха из постепенно поднимающихся к центру шипов. Легкий сферический подъем в центре модуля способствует тренировке мышц стопы и голени, развитию координации и равновесия. Рисунок в центре, выполненный из шипов разной высоты оказывает дополнительное стимулирующее воздействие на акупунктурные точки стопы.

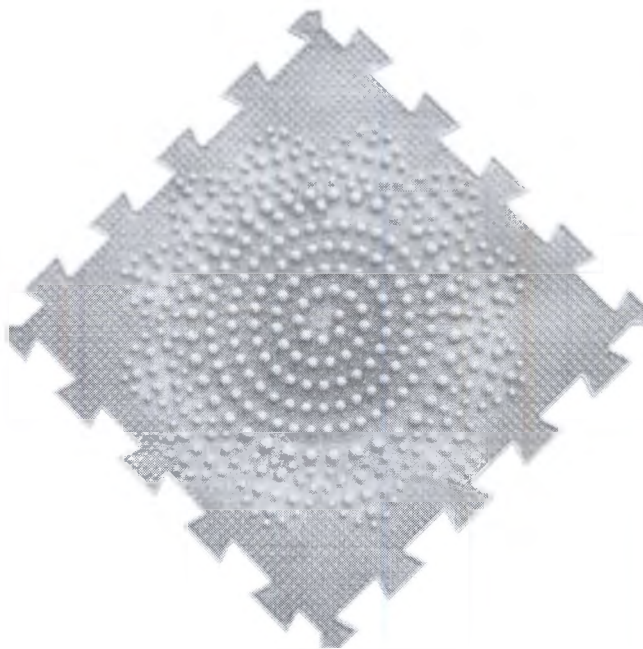


Рисунок 8 - Модуль «Подсолнух»

Модуль «**Бабочка**» - поверхность модуля сочетает мягкие травинки по периметру и полые выступы и шипы, из которых выполнен рисунок в виде бабочки. Деликатная стимуляция подошвы разными массажными элементами улучшает кровообращение нижних конечностей, способствует укреплению мышечно-связочного аппарата стопы и профилактике плоскостопия у детей, которые только начинают ходить.

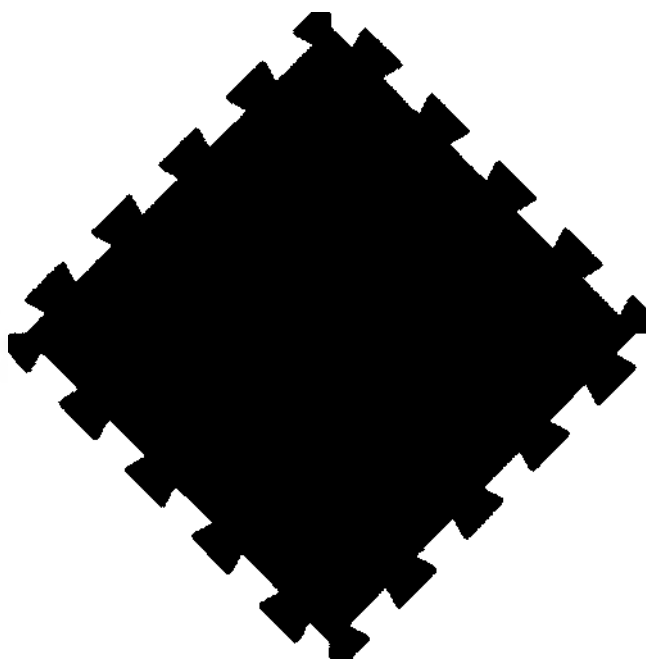


Рисунок 9 - Модуль «Бабочка»

Модуль «**Морское Дно**» - поверхность модуля состоит из объемных изображений морских жителей: ракушки, морские коньки, морские звезды, кораллы. Разнообразные формы и рельефы самих массажных элементов, а также резкие перепады между ними способствуют профилактике и коррекции варусной и вальгусной постановке стоп,

дополнительно тренируют мышцы голени и улучшают кровообращение голеностопного сустава.

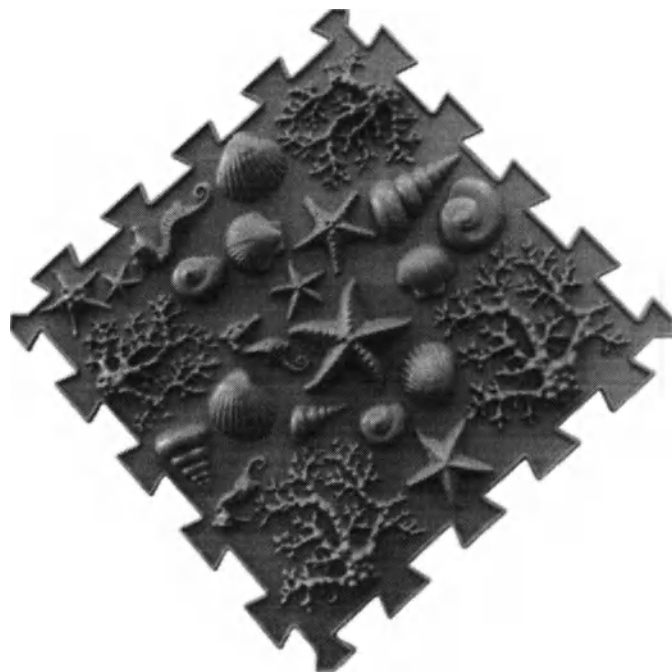


Рисунок 10 - Модуль «Морское Дно»

Модуль «Океан» - поверхность модуля состоит из массажных элементов, которые идеально имитируют обитателей океанских глубин помогают полностью погрузиться в атмосферу подводного мира. Многообразие массажных элементов не только способствует отличной тренировке и укреплению мышц стопы и голени, развитию координации и равновесия, но и развитию мелкой моторики.



Рисунок 11 - Модуль «Океан»

Модуль **«Морской Риф»** - поверхность модуля состоит из мягких массажных элементов: круглых и ребристых кораллов, а также морских водорослей из шипов. Коврик точно воздействует на рефлексогенные точки стопы, улучшает кровообращение и способствует формированию опорного аппарата с сохранением равновесия.

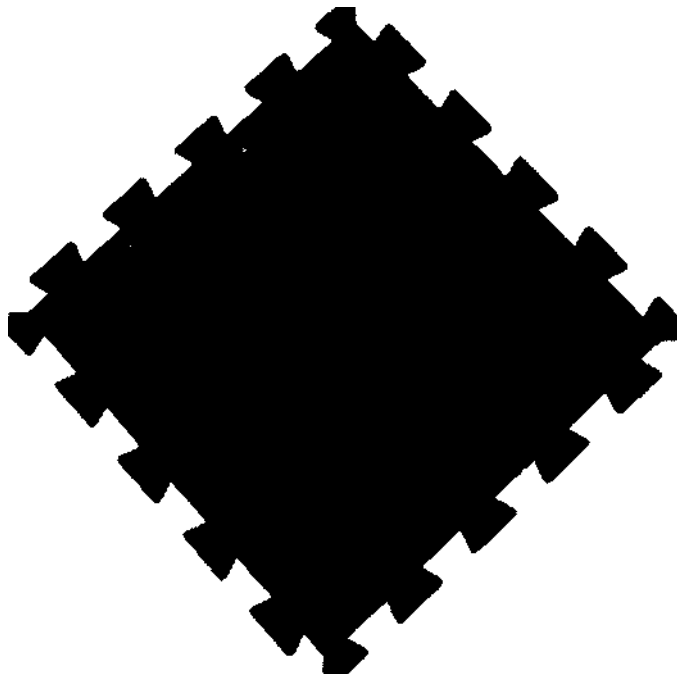


Рисунок 12 - Модуль **«Морской Риф»**

Модуль **«Морская Волна»** - поверхность модуля имитирует мелкие волны с пенными гребнями. Ребристая пружинящая поверхность каждой волны стимулирует подошвенные мышцы, способствует профилактике и лечению плоскостопия, развивает вестибулярный аппарат за счет ходьбы по ограниченной поверхности.

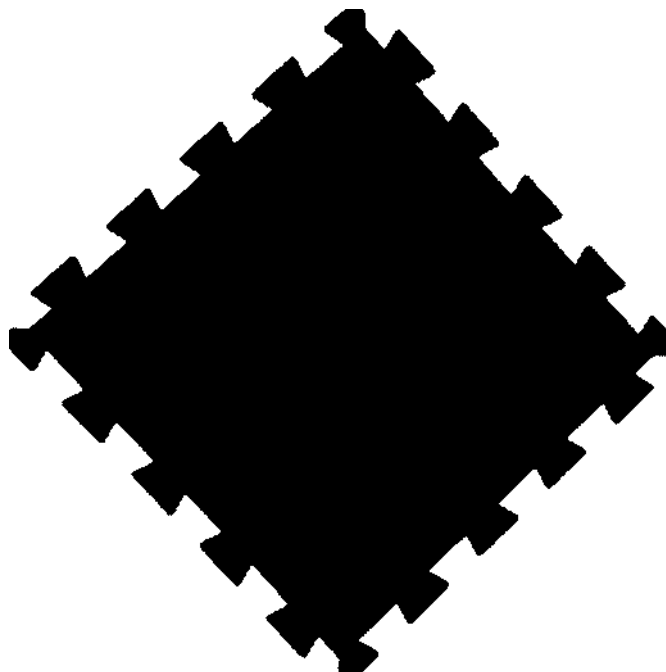


Рисунок 13 - Модуль **«Морская Волна»**

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект изделия состоит из восьми массажных модулей. В стандартном исполнении существует двадцать шесть вариантов комплектации:

- 1) комплект, состоящий из восьми модулей, по паре каждого вида: «Жёсткие Кактусы», «Мягкие Кактусы», «Жёсткие Ёжики», «Мягкие Ёжики»; артикул: МИКС «Ёжики»;
- 2) комплект, состоящий из восьми модулей, по паре каждого вида: «Жёсткая Трава», «Жёсткие Шипы», «Жёсткие Шишки», «Мягкие Шишки»; артикул: МИКС «Лес»;
- 3) комплект, состоящий из восьми модулей, по четыре каждого вида: «Мягкие Морские Камни», «Жёсткие Морские Камни»; артикул: МИКС «Морские камни»;
- 4) комплект, состоящий из восьми модулей, по паре каждого вида: «Мягкая Трава», «Галька», «Подсолнух», «Бабочка»; артикул: МИКС «Первые шаги»;
- 5) комплект, состоящий из восьми модулей, по паре каждого вида: «Жёсткая Трава», «Жёсткие Шипы», «Жёсткие Шишки», «Мягкие Ёжики»; артикул: МИКС «Универсальный»;
- 6) комплект, состоящий из восьми модулей, по паре каждого вида: «Морское Дно», «Морской Риф», «Океан», «Морская Волна»; артикул: МИКС «Море»;
- 7) комплект, состоящий из восьми модулей, по четыре каждого вида: «Жёсткие Кактусы», «Жёсткие Ёжики»; артикул: МИКС «Тропа здоровья»;
- 8) комплект, состоящий из восьми модулей, по паре каждого вида: «Мягкие Морские Камни», «Мягкие Кактусы», «Жёсткие Морские камни», «Мягкие Ёжики»; артикул: «Саванна»;
- 9) комплект из восьми модулей «Жёсткие Кактусы»; артикул: 8ЖКК;
- 10) комплект из восьми модулей «Мягкие Кактусы»; артикул: 8МКК;
- 11) комплект из восьми модулей «Жёсткие Ёжики»; артикул: 8ЖЁЖ;
- 12) комплект из восьми модулей «Мягкие Ёжики»; артикул: 8МЁЖ;
- 13) комплект из восьми модулей «Жёсткая Трава»; артикул: 8ЖТР;
- 14) комплект из восьми модулей «Жёсткие Шипы»; артикул: 8ЖШП;
- 15) комплект из восьми модулей «Жёсткие Шишки»; артикул: 8ЖШШ;
- 16) комплект из восьми модулей «Мягкие Шишки»; артикул: 8МШШ;
- 17) комплект из восьми модулей «Мягкие Морские Камни»; артикул: 8ММК;
- 18) комплект из восьми модулей «Жёсткие Морские Камни»; артикул: 8ЖМК;
- 19) комплект из восьми модулей «Мягкая Трава»; артикул: 8МТР;
- 20) комплект из восьми модулей «Галька»; артикул: 8ГЛ;
- 21) комплект из восьми модулей «Подсолнух»; артикул: 8ПД;
- 22) комплект из восьми модулей «Бабочка»; артикул: 8ББ;
- 23) комплект из восьми модулей «Морское дно»; артикул: 8МД;
- 24) комплект из восьми модулей «Морской Риф»; артикул: 8МР;
- 25) комплект из восьми модулей «Океан»; артикул: 8ОК;
- 26) комплект из восьми модулей «Морская Волна»; артикул: 8МВ;

Комплект поставки изделия должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Кол-во, шт
МИКС «Ёжики» в составе:	
Модуль «Жёсткие Кактусы»	2 шт.
Модуль «Мягкие Кактусы»	2 шт.
Модуль «Жёсткие Ёжики»	2 шт.
Модуль «Мягкие Ёжики»	2 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Лес» в составе:	
Модуль «Жёсткая Трава»	2 шт.
Модуль «Жёсткие Шипы»	2 шт.
Модуль «Жёсткие Шишки»	2 шт.
Модуль «Мягкие Шишки»	2 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Морские Камни» в составе:	
Модуль «Мягкие Морские Камни»	4 шт.
Модуль «Жёсткие Морские Камни»	4 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Первые Шаги» в составе:	
Модуль «Мягкая Трава»	2 шт.
Модуль «Галька»	2 шт.
Модуль «Подсолнух»	2 шт.
Модуль «Бабочка»	2 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Универсальный» в составе:	
Модуль «Жёсткая Трава»	2 шт.
Модуль «Жёсткие Шипы»	2 шт.
Модуль «Жёсткие Шишки»	2 шт.
Модуль «Мягкие Ёжики»	2 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Море» в составе:	
Модуль «Морское Дно»	2 шт.
Модуль «Морской Риф»	2 шт.

Наименование	Кол-во, шт
Модуль «Океан»	2 шт.
Модуль «Морская Волна»	2 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Тропа Здоровья» в составе:	
Модуль «Жёсткие Кактусы»	4 шт.
Модуль «Жёсткие Ёжики»	4 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
МИКС «Саванна» в составе:	
Модуль «Мягкие Морские Камни»	2 шт.
Модуль «Мягкие Кактусы»	2 шт.
Модуль «Жёсткие Морские камни»	2 шт.
Модуль «Мягкие Ёжики»	2 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Жёсткие Кактусы» в составе:	
Модуль «Жёсткие Кактусы»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Мягкие Кактусы» в составе:	
Модуль «Мягкие Кактусы»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Жёсткие Ёжики» в составе:	
Модуль «Жёсткие Ёжики»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Мягкие Ёжики» в составе:	
Модуль «Мягкие Ёжики»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Жёсткая Трава» в составе:	
Модуль «Жёсткая Трава»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.

Наименование	Кол-во, шт
Паспорт	1 шт.
Комплект «Жёсткие Шипы» в составе:	
Модуль «Жёсткие Шипы»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Жёсткие Шишки» в составе:	
Модуль «Жёсткие Шишки»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Мягкие Шишки» в составе:	
Модуль «Мягкие Шишки»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Мягкие Морские Камни» в составе:	
Модуль «Мягкие Морские Камни»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Жёсткие Морские Камни» в составе:	
Модуль «Жёсткие Морские Камни»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Мягкая Трава» в составе:	
Модуль «Мягкая Трава»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Галька» в составе:	
Модуль «Галька»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Подсолнух» в составе:	
Модуль «Подсолнух»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Наименование	Кол-во, шт
Комплект «Бабочка» в составе:	
Модуль «Бабочка»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Морское дно» в составе:	
Модуль «Морское дно»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Морской Риф» в составе:	
Модуль «Морской Риф»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Океан» в составе:	
Модуль «Океан»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект «Морская Волна» в составе:	
Модуль «Морская Волна»	8 шт.
Эксплуатационная документация	
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт	1 шт.

5 МАРКИРОВКА

5.1 Маркировка – по ГОСТ Р 50444.

5.2 На каждой индивидуальной упаковке изделия должна быть выполнена маркировка, где должно быть указано:

- полное наименование изделия;
- условное наименование изделия;
- артикул;
- номер партии;
- обозначение настоящих технических условий;
- дата изготовления (число, год);
- срок годности изделия;
- наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;
- адрес фактического производства изделия;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- знак «знак «лента Мебиуса» о возможности вторичной переработки изделия — знак наносится непосредственно на каждый модуль изделия.

5.3 На транспортную тару должна быть наклеена этикетка, содержащая:

- наименование изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- дата изготовления (или две последние цифры);
- дату упаковывания;
- штамп ОТК;
- количество упакованных изделий, шт;
- массу (нетто), кг;

5.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги», «Верх» (знак указывает правильное вертикальное положение груза), «знак «лента Мебиуса» о возможности вторичной переработки тарных и упаковочных материалов.



Беречь от влаги



«Верх» (знак указывает правильное вертикальное положение груза)



«знак «лента Мебиуса» о возможности вторичной переработки тарных и упаковочных материалов

5.4 Условные обозначения, применяемые на этикетке (См. Таблицу 2):

Таблица 2

Символ	Значение символа
	- Код партии (серийный номер).
	- Дата изготовления.
	- Информация о производителе.

6 ПОКАЗАНИЯ:

- Статическая и венозная недостаточности нижних конечностей;
- Плоскостопие;
- Вальгусная деформация стопы, варусная деформация стопы;
- Тяжесть и боль в ногах;

- Отеки ног;
- Гипертонус мышц голени.

7 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Микоз стопы;
- Раневые поверхности подошвы стопы;
- Синдром диабетической стопы;
- Гнойный некротический васкулит кожи стоп;

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Геометрические размеры и общий вид массажных модулей должны соответствовать, указанным на рисунках А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12, А13 (Приложение А)

Допустимые отклонение размеров:

- а) Для габаритов модуля – не более 1%;
- б) Для размеров элементов рельефа – не более 1 мм;
- в) Для толщины основы – не более 0,8 мм.

8.2 Масса одного модуля, не более 0,3 кг. Масса брутто одного комплекта изделий, не более 3 кг.

8.3 Изделия в стандартной комплектации должны быть изготовлены в следующих цветовых исполнениях (См. Таблицу 3):

Таблица 3. Варианты цветового исполнения изделия.

Артикул комплекта	Цветовая гамма модулей
МИКС «Ёжики»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 2 модуля "Жёсткие Кактусы" красного цвета, - 2 модуля "Мягкие Кактусы" зеленого цвета, - 2 модуля "Жёсткие Ёжики" желтого цвета, - 2 модуля "Мягкие Ёжики" фиолетового цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Лес»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 2 модуля "Жёсткая Трава" зеленого цвета, - 2 модуля "Жёсткие Шипы" красного цвета, - 2 модуля "Жёсткие Шишки" желтого цвета, - 2 модуля "Мягкие Шишки" фиолетового цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Морские камни»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 1 модуль "Мягкие Морские Камни" желтого цвета, - 1 модуль "Жёсткие Морские Камни" желтого цвета, - 1 модуль "Мягкие Морские Камни" зеленого цвета, - 1 модуль "Жёсткие Морские Камни" зеленого цвета, - 1 модуль "Мягкие Морские Камни" красного цвета, - 1 модуль "Жёсткие Морские Камни" красного цвета, - 1 модуль "Мягкие Морские Камни" фиолетового цвета, - 1 модуль "Жёсткие Морские Камни" фиолетового цвета.

Артикул комплекта	Цветовая гамма модулей
	(Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Первые шаги»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 2 модуля "Галька" голубого цвета, - 2 модуля "Мягкая Трава" зеленого цвета, - 2 модуля "Подсолнух" желтого цвета, - 2 модуля "Бабочка" розового цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Универсальный»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 2 модуля "Жёсткая Трава" зеленого цвета, - 2 модуля "Жёсткие Шипы" красного цвета, - 2 модуля "Жёсткие Шишки" желтого цвета, - 2 модуля "Мягкие Ёжики" фиолетового цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Море»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 2 модуля "Морское Дно" оранжевого цвета, - 2 модуля "Океан" бирюзового цвета, - 2 модуля "Морской Риф" рубинового цвета, - 2 модуля "Морская Волна" голубого цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Тропа здоровья»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 4 модуля "Жесткие Кактусы" бирюзового цвета, - 4 модуля "Жесткие Ёжики" синего цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
МИКС «Саванна»	Комбинированный набор из 8 модулей разного вида: - 2 модуля "Жёсткие Морские камни" желтого цвета, - 2 модуля "Мягкие Морские Камни" зеленого цвета, - 2 модуля "Мягкие Кактусы" красного цвета, - 2 модуля "Мягкие Ёжики" фиолетового цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ЖКК	8 модулей "Жёсткие Кактусы" - по два модуля красного, зеленого, желтого, фиолетового цветов или 8 шт. бирюзового цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
8МКК	8 модулей "Мягкие Кактусы" - по два модуля красного, зеленого, желтого, фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ЖЁЖ	8 модулей "Жёсткие Ёжики" - по два модуля красного, зеленого, желтого, фиолетового цветов или 8шт. синего цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
8МЁЖ	8 модулей "Мягкие Ёжики" - по два модуля красного, зеленого, желтого, фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ЖТР	8 модулей "Жесткая Трава" - по два модуля фиолетового, зеленого, желтого и красного цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ЖШП	8 модулей "Жёсткие Шипы" - по два модуля красного, зеленого, желтого и фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ЖШШ	8 модулей "Жёсткие Шишки" - по два модуля красного, зеленого, желтого и фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)

Артикул комплекта	Цветовая гамма модулей
8МШШ	8 модулей "Мягкие Шишки" - по два модуля красного, зеленого, желтого и фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ММК	8 модулей "Мягкие Морские камни" - по два модуля красного, зеленого, желтого и фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ЖМК	8 модулей "Жёсткие Морские камни" - по два модуля красного, зеленого, желтого и фиолетового цветов. (Оттенки цвета не регламентируются)
8МТР	8 модулей "Мягкая Трава" ярко-зеленого цвета. (Оттенки цвета не регламентируются)
8ГЛ	8 модулей "Галька" голубого цвета (Оттенки цвета не регламентируются)
8ПД	8 модулей "Подсолнух" желтого цвета (Оттенки цвета не регламентируются)
8ББ	8 модулей "Бабочка" розового цвета (Оттенки цвета не регламентируются)
8МД	8 модулей "Морское Дно" оранжевого цвета (Оттенки цвета не регламентируются)
8МР	8 модулей "Морской Риф" рубинового цвета (Оттенки цвета не регламентируются)
8ОК	8 модулей "Океан" бирюзового цвета (Оттенки цвета не регламентируются)
8МВ	8 модулей "Морская Волна" голубого цвета (Оттенки цвета не регламентируются)

8.4 Модули изделия должны легко скрепляться между собой. Качество скрепления должно позволять держать 3 скрепленных в длину модуля в вывешенном состоянии в течение 3 минут.

8.5 На лицевой поверхности изделия не допускаются: наплывы, вмятины, царапины, пятна и посторонние включения. Допускается образование незначительных пятен на лицевой поверхности изделий в зоне впрыска материала.

8.6 Фактура (рельеф) лицевой поверхности модулей должны соответствовать фактуре образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

8.9 Твердость модулей изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4 настоящих ТУ.

Таблица 4

Наименование модуля	Норма, ед. по Шор А
Модуль «Жёсткие Кактусы»	70-75
Модуль «Мягкие Кактусы»	45-50
Модуль «Жёсткие Ёжики»	70-75
Модуль «Мягкие Ёжики»	45-50
Модуль «Жёсткая Трава»	70-75

Модуль «Мягкая Трава»	45-50
Модуль «Жёсткие Шипы»	70-75
Модуль «Жёсткие Шишки»	70-75
Модуль «Мягкие Шишки»	45-50
Модуль «Жёсткие Морские Камни»	70-75
Модуль «Мягкие Морские Камни»	45-50
Модуль «Галька»	45-50
Модуль «Подсолнух»	45-50
Модуль «Бабочка»	45-50
Модуль «Морское Дно»	45-50
Модуль «Морской Риф»	45-50
Модуль «Океан»	45-50
Модуль «Морская Волна»	45-50

8.10 Остаточная деформация модулей, не более 2 мм.

8.11 Относительное удлинение при разрыве, не менее 100%.

8.12 Прочность при разрыве, не менее 5 МПа.

8.13 Кромки изделия должны быть ровными, без заусенцев и щербин. Углы изделия должны быть прямыми, отклонение от перпендикулярности углов не более $\pm 3^\circ$.

9 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

9.1 Перед началом применения ознакомьтесь с настоящим руководством.

9.2 Убедитесь в целостности индивидуальной упаковки (См. Рисунок 14).



Рисунок 14 – Индивидуальная упаковка изделия

9.3 Откройте коробку как показано на рисунке 15.

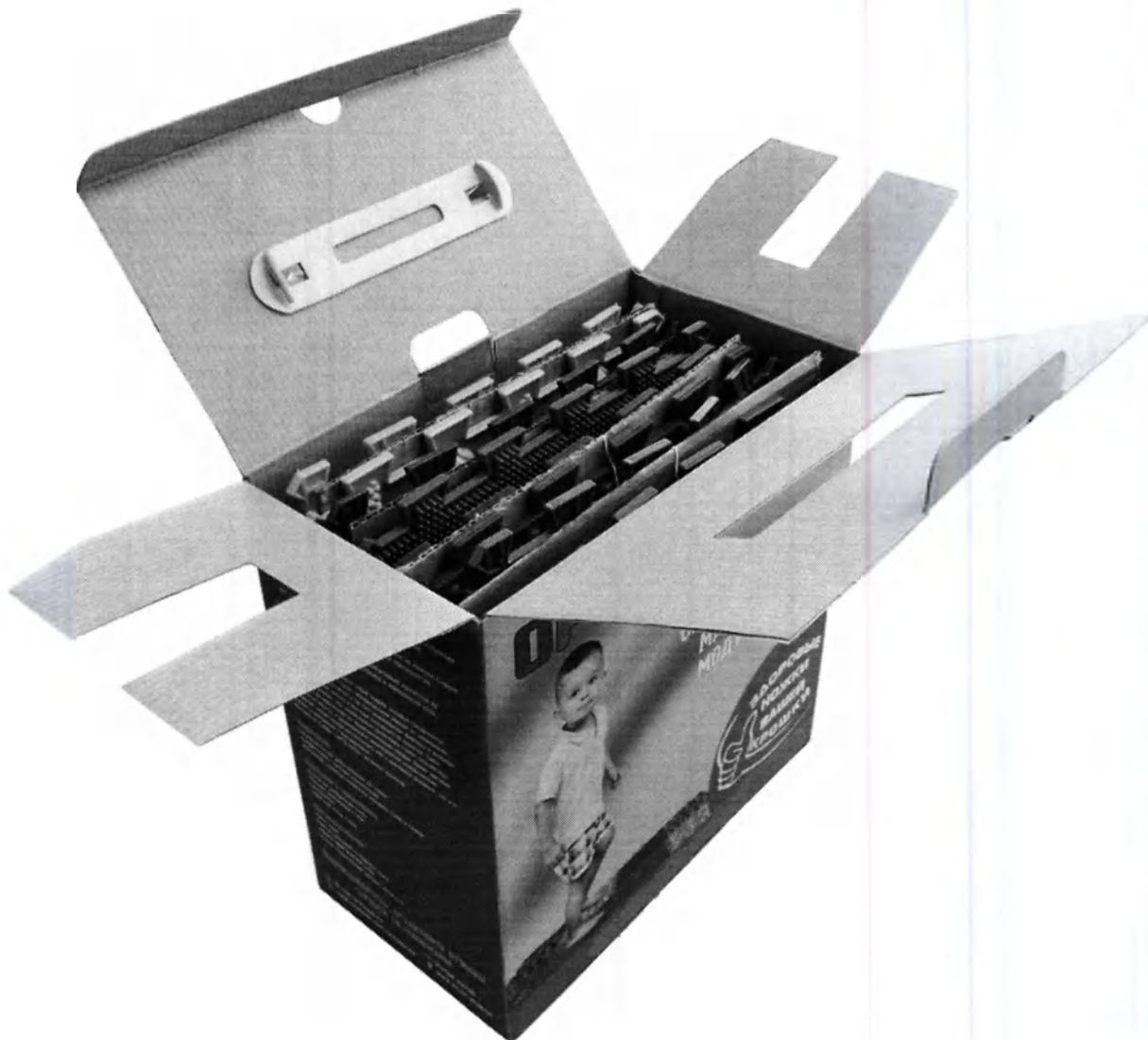


Рисунок 15 – Открытая индивидуальная упаковка с изделием

9.4 Соберите единый коврик из массажных модулей, предварительно вынув их из индивидуальной упаковки. Соедините модули между собой по принципу пазлов (паз – выступ). Из модулей на месте применения формируется рельефное массажное напольное покрытие в виде ковра или дорожки (См. Рисунок 16).

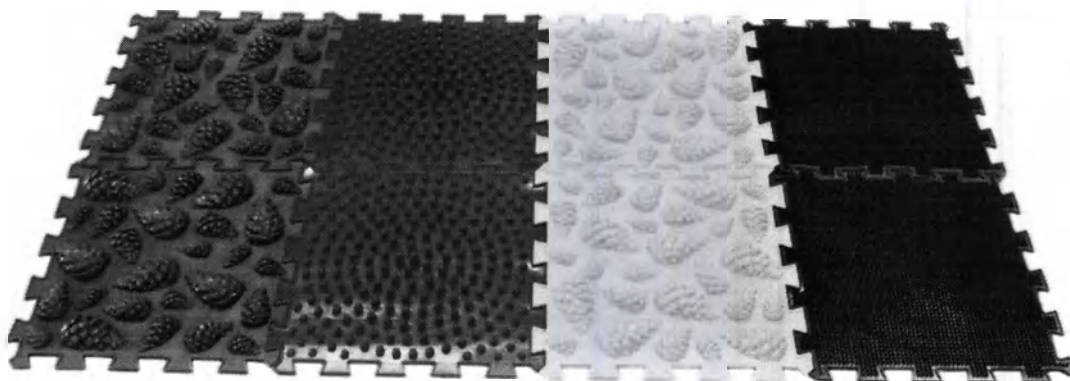


Рисунок 16 - МИКС «Лес» в собранном виде

10 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- повреждена или открыта упаковка;
- обнаружено повреждение модулей изделия;

11 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в распакованном виде в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 24 ч.

11.2 Использование изделия противопоказано при ранах подошвенной поверхности стопы, микозе стоп, синдроме диабетической стопы, гнойном некротическом васкулите стоп.

11.3 Использование изделия при грибковых поражениях должно быть строго индивидуальным.

12 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Отсутствуют при использовании в соответствии с руководством пользователя.

13 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

13.1 Изделие не подлежит ремонту.

13.2 В случае прихода в негодность изделие подлежит утилизации.

13.3 Мыть изделие в теплой воде (27 ± 5)°C по мере загрязнения с использованием моющих средств типа «Лотос» или мыла детского;

13.4 Сушить вдали от нагревательных приборов.

13.5 Перед первым применением рекомендуется помыть теплой водой с детским мылом для удаления технологических остатков.

13.6 Дезинфекция осуществляется способом погружения на 15 минут в пластмассовую емкость, закрывающуюся крышкой (толщина слоя 5 %-ного раствора Аламинола ТУ 9392-089-05784466-2005 над изделием должна быть не менее 10мм) с последующими промывкой в проточной воде в течение 3-минут и сушкой с помощью чистых тканевых салфеток (в клиниках и больницах).

14 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

14.1 Допускается транспортирование изделий в групповой упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование изделий в групповой упаковке морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки грузов». Вид отправки – контейнерами и мелкая отправка. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки - мелкий малотоннажный.

14.2 При транспортировании изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование групповой упаковки изделий.

14.3 Условия транспортирования изделий должны соответствовать ГОСТ 15150 для условий хранения 5 (ОЖ4).

14.4 Изделия в групповой упаковке изготовителя следует хранить на складах поставщика и потребителя на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, без воздействия солнечных лучей. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается. Число рядов на стеллаже не должно превышать 5.

14.5 Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2, по ГОСТ 15150.

14.6 При хранении упаковок под навесом изделия должны быть уложены на прокладки, при этом высота штабеля не должна превышать 1,5м.

15 УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ

15.1 Изделия по результатам эксплуатации, признанные не соответствующими техническим условиям, подлежат утилизации и уничтожению специализированными предприятиями по сбору и переработке вторичного сырья.

15.2 Использованные изделия подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

16 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

16.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.2 В течение гарантийного срока Изготовитель безвозмездно устраняет обнаруженные нарушения функционирования изделия при условии соблюдения Потребителем правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

16.3 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

16.4 Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

17 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производитель: ООО «ЛидерПолимер» (350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3)

Телефон: +7 (863) 333-02-04

info@liderpolymer.ru

Разработчик: ООО «ЛидерПолимер» (350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3)

18 АДРЕСА МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова, 136-138

Геометрические размеры и общий вид массажных модулей (все размеры указаны в миллиметрах)

Рисунок А1 - Геометрические размеры и общий вид массажных модулей «Жёсткая Трава»/«Мягкая Трава»

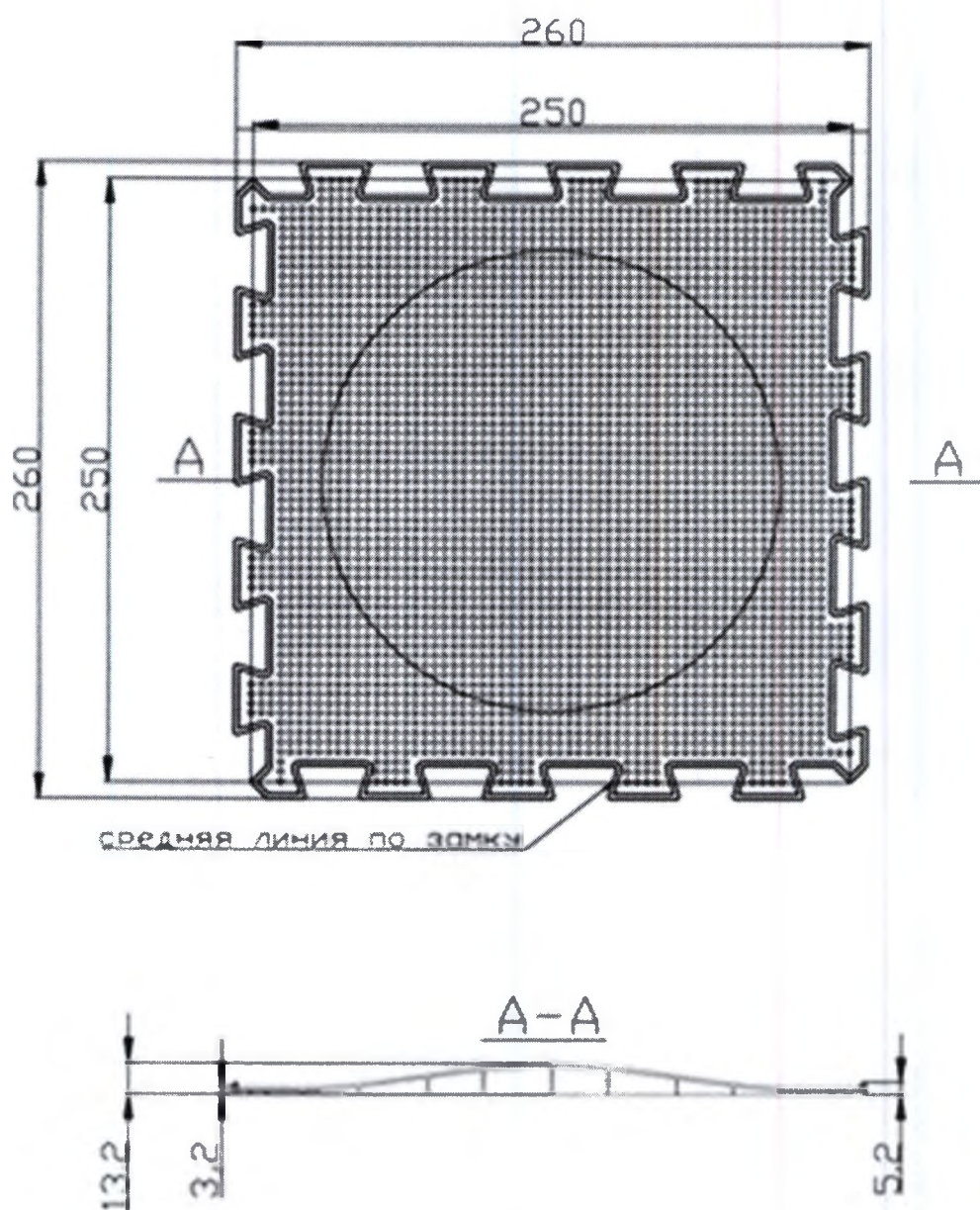


Рисунок А2 - Геометрические размеры и общий вид массажных модулей «Жёсткие Шишки»/«Мягкие Шишки»

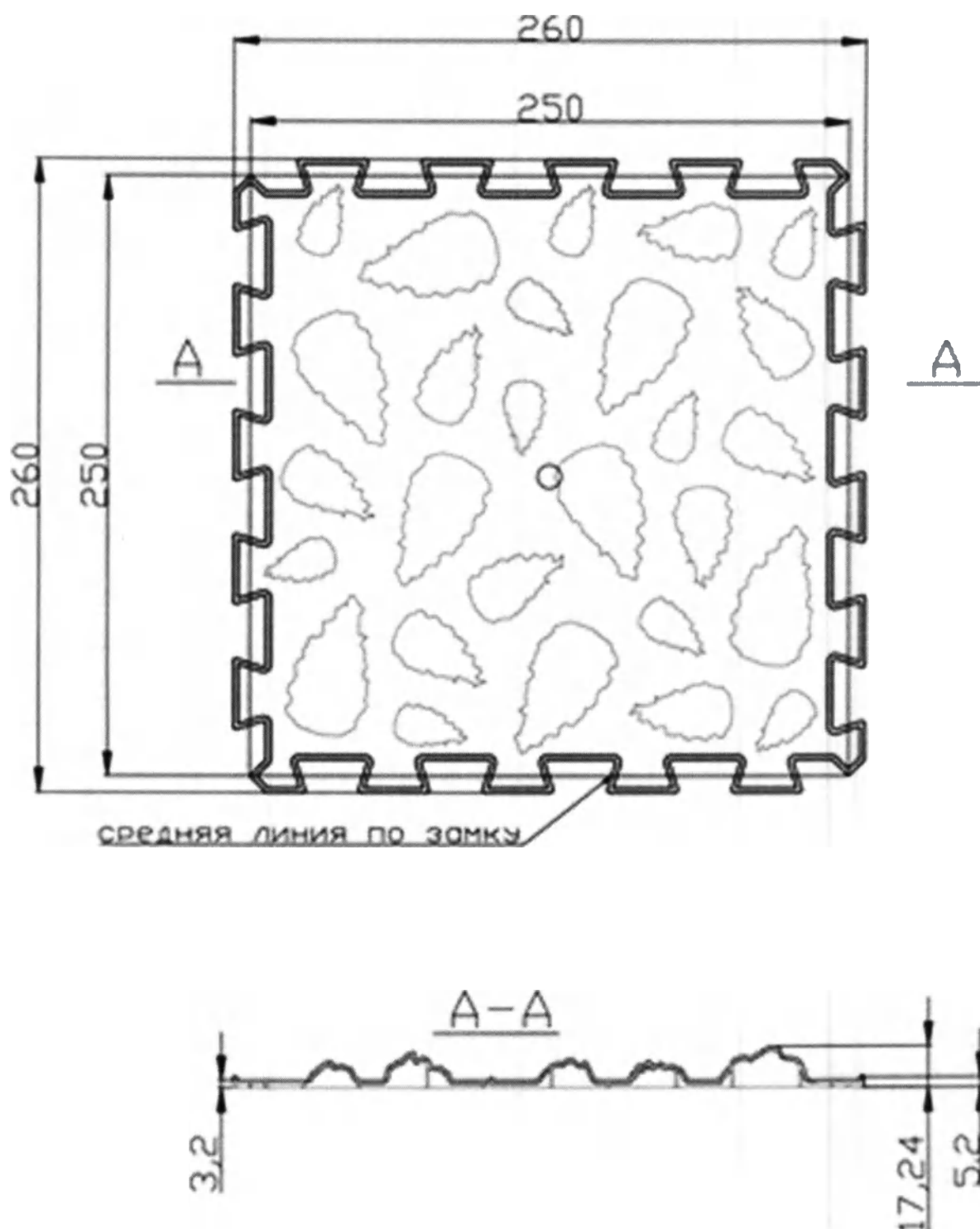


Рисунок А3 - Геометрические размеры и общий вид массажных модулей «Жёсткие Ёжики»/«Мягкие Ёжики»

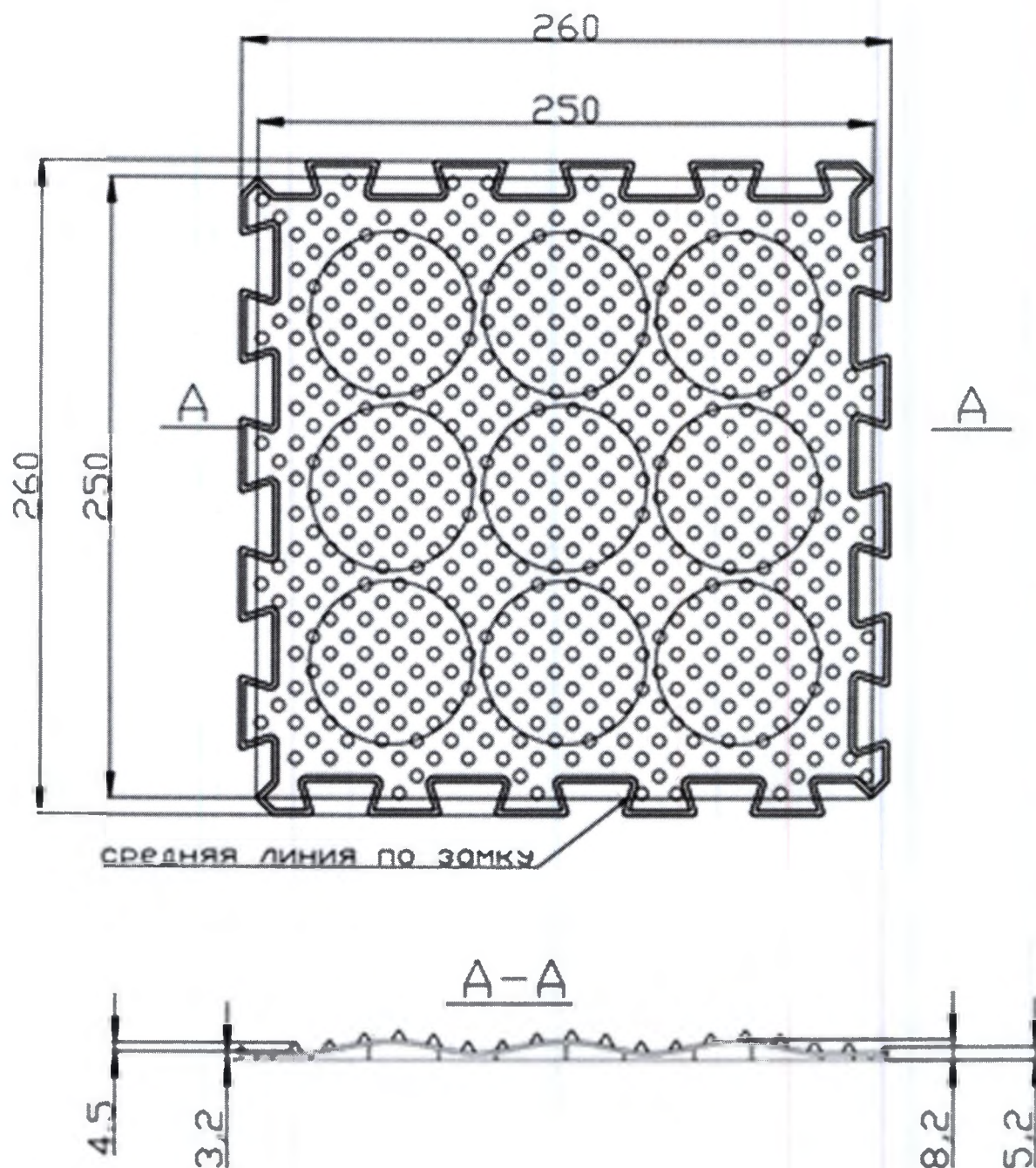


Рисунок А4 - Геометрические размеры и общий вид массажных модулей «Жёсткие Морские Камни»/«Мягкие Морские Камни»

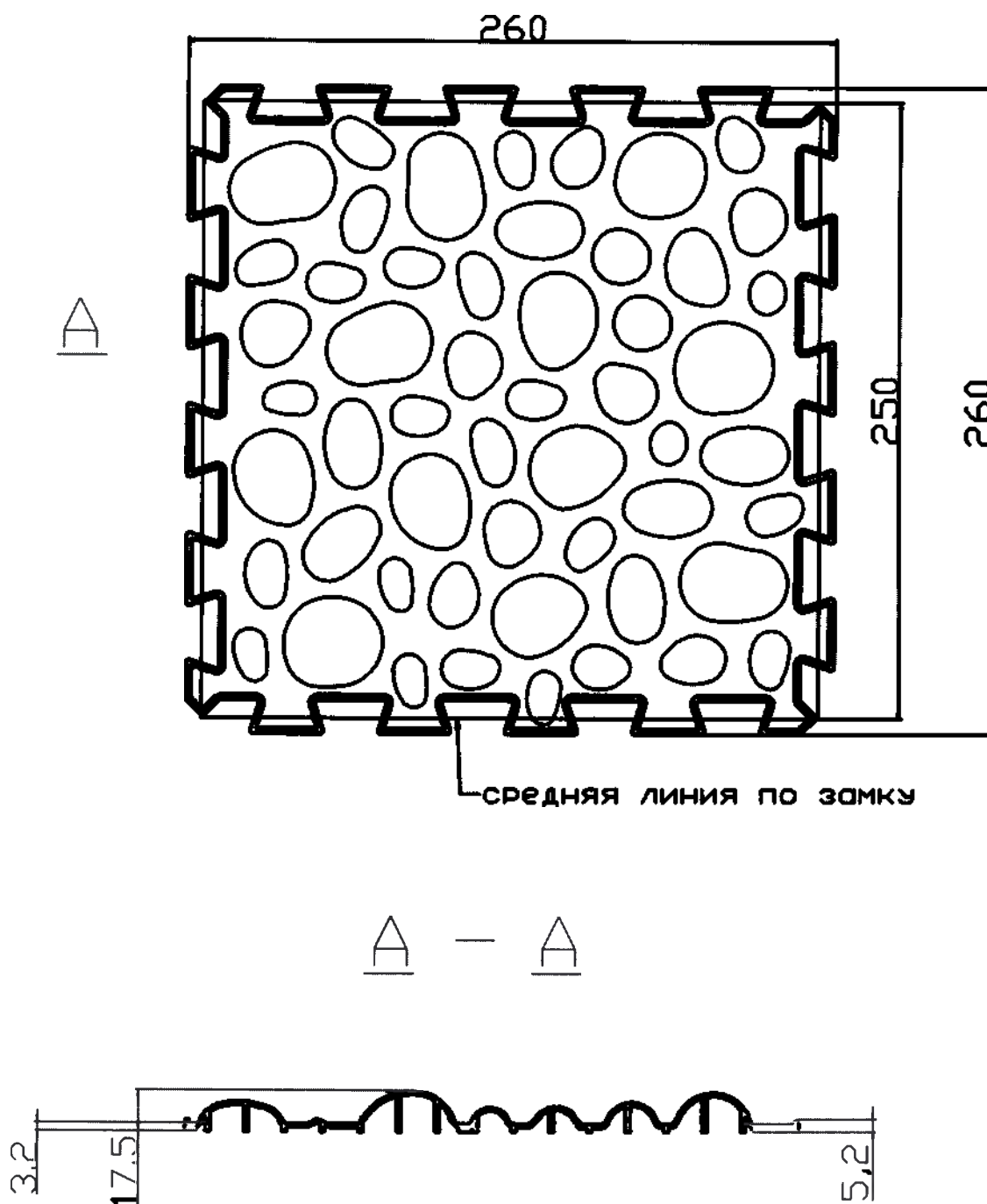


Рисунок А5 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Жёсткие Шипы»

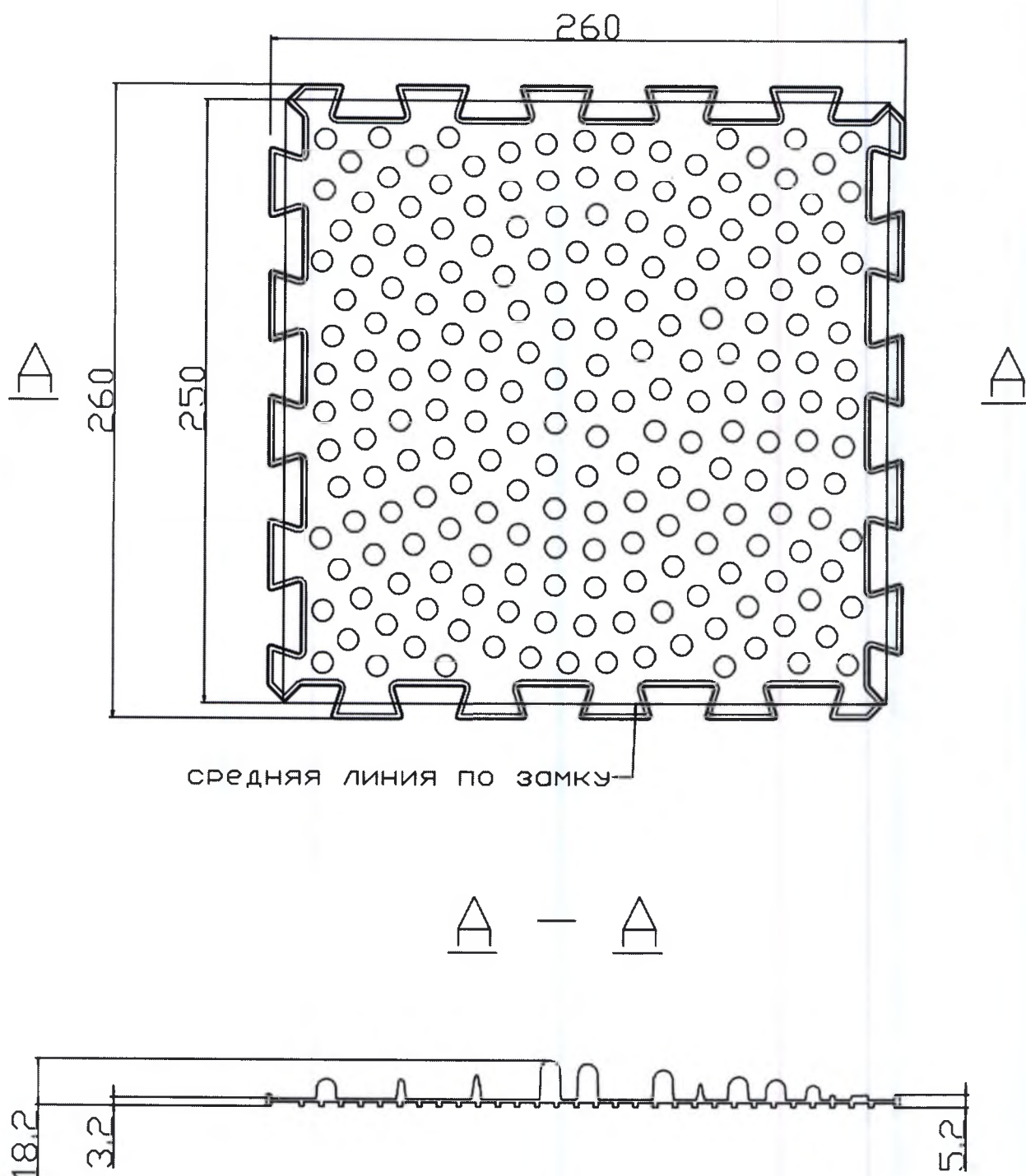


Рисунок А6 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Бабочка»

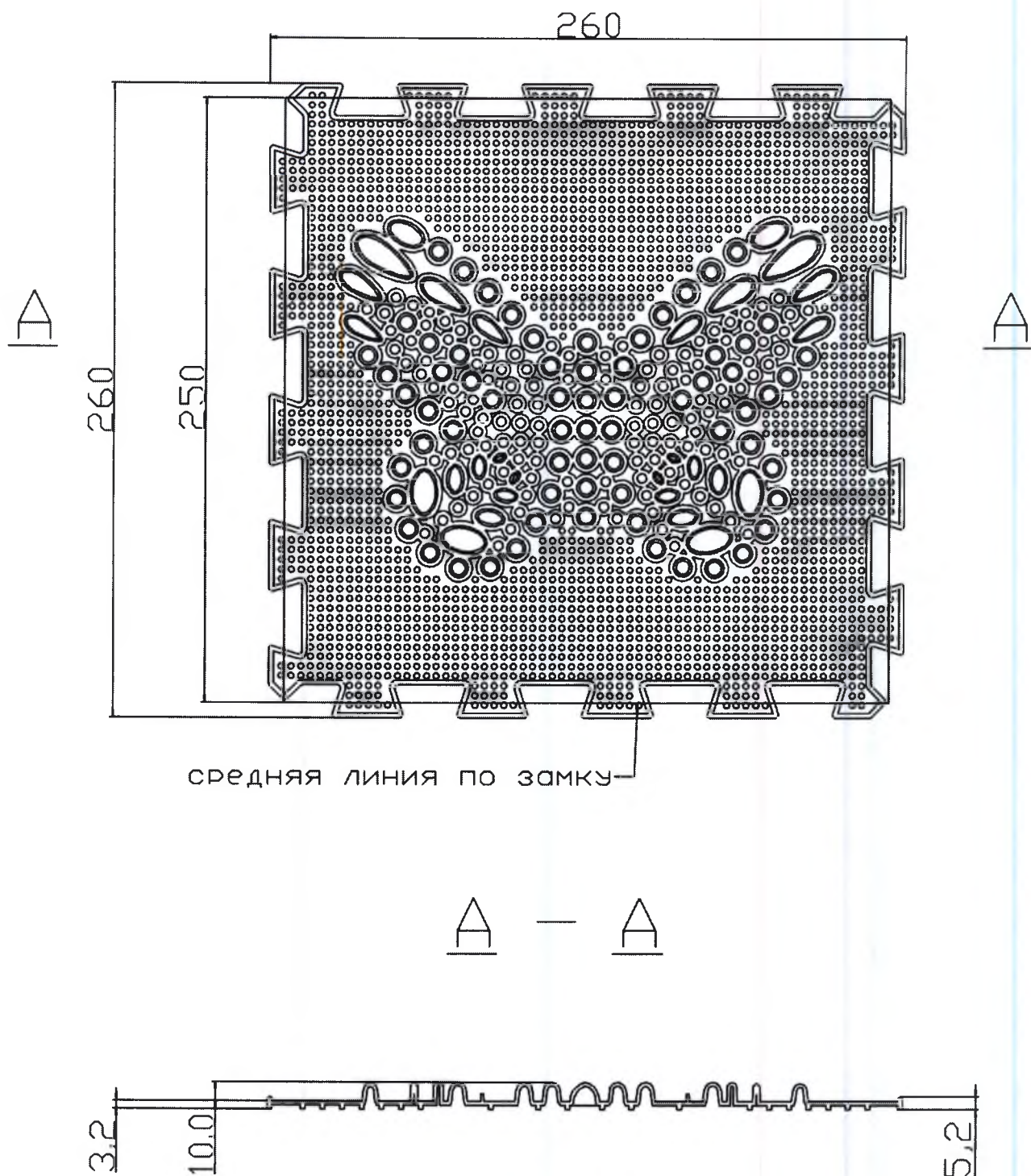


Рисунок А7 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Подсолнух»

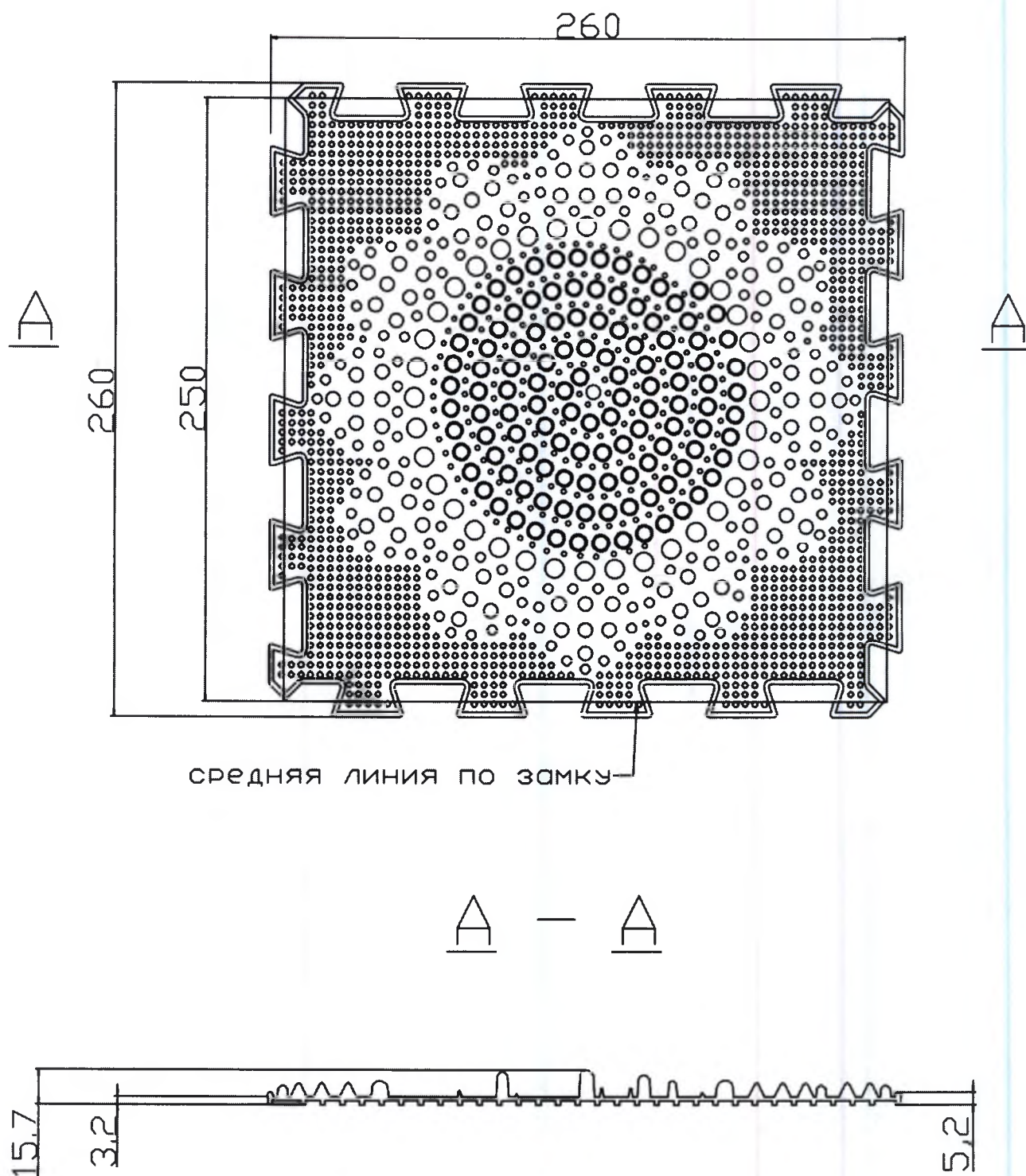


Рисунок А8 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Галька»

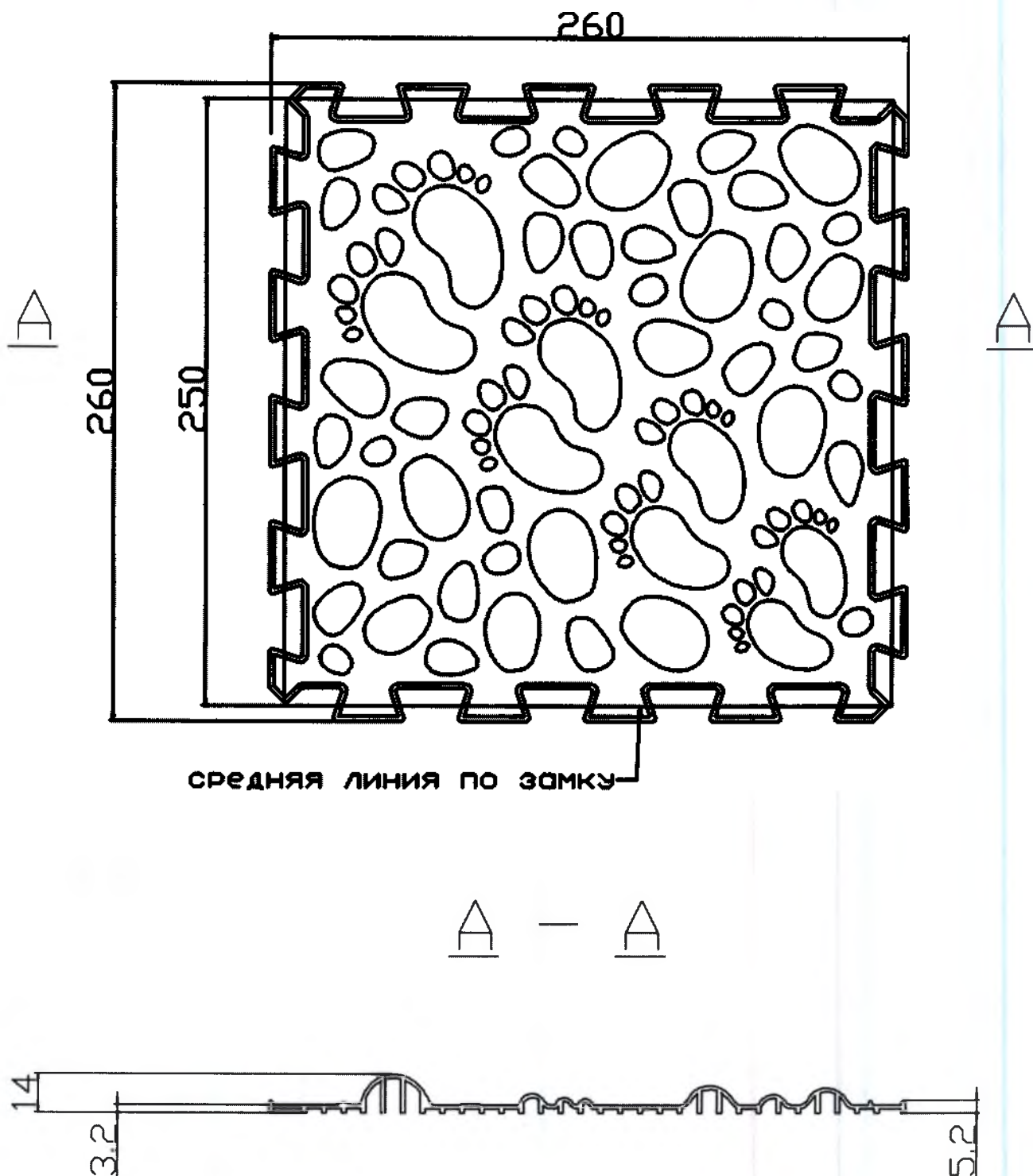


Рисунок А9 - Геометрические размеры и общий вид массажных модулей «Жёсткие Кактусы»/«Мягкие Кактусы»

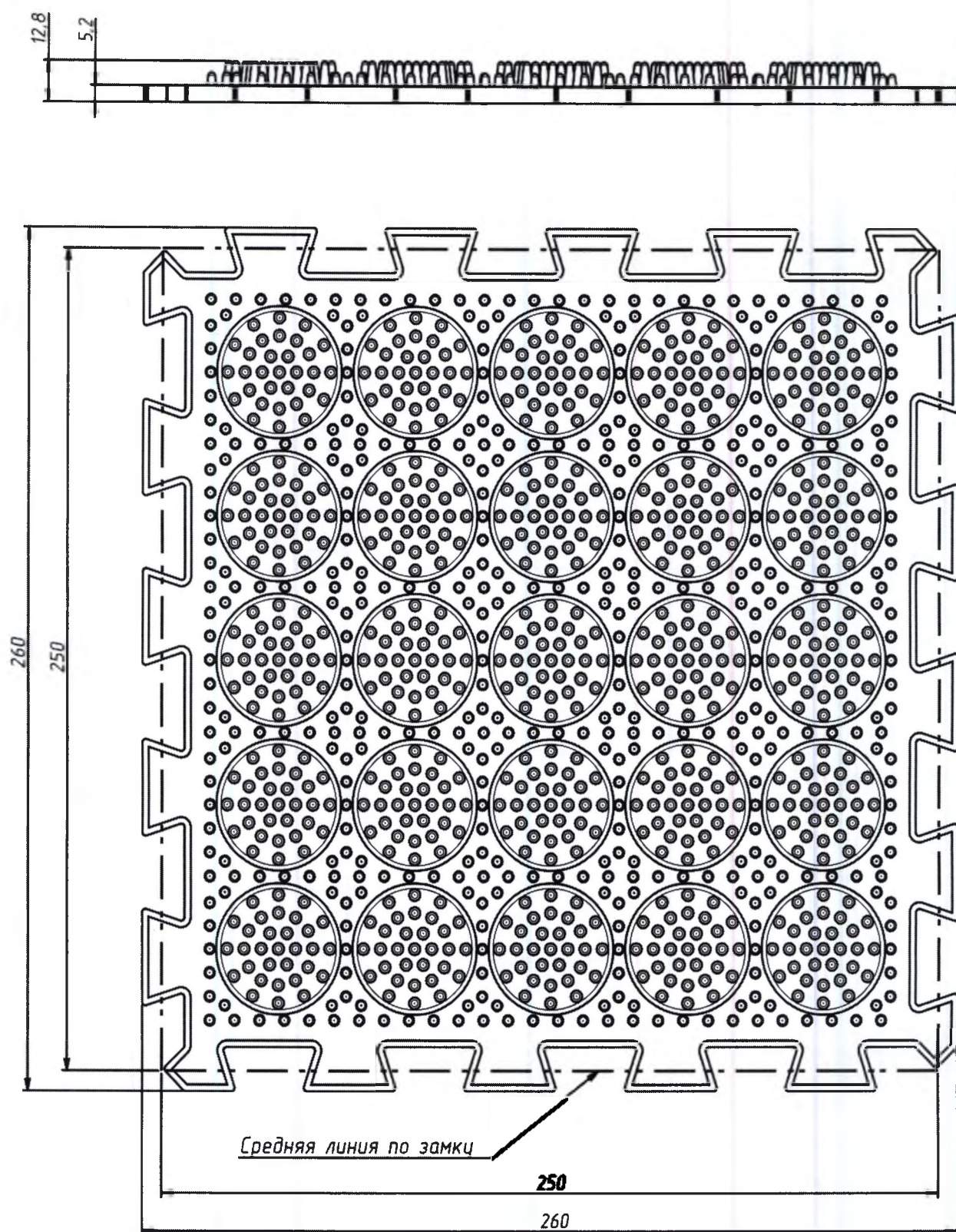


Рисунок А10 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Океан»

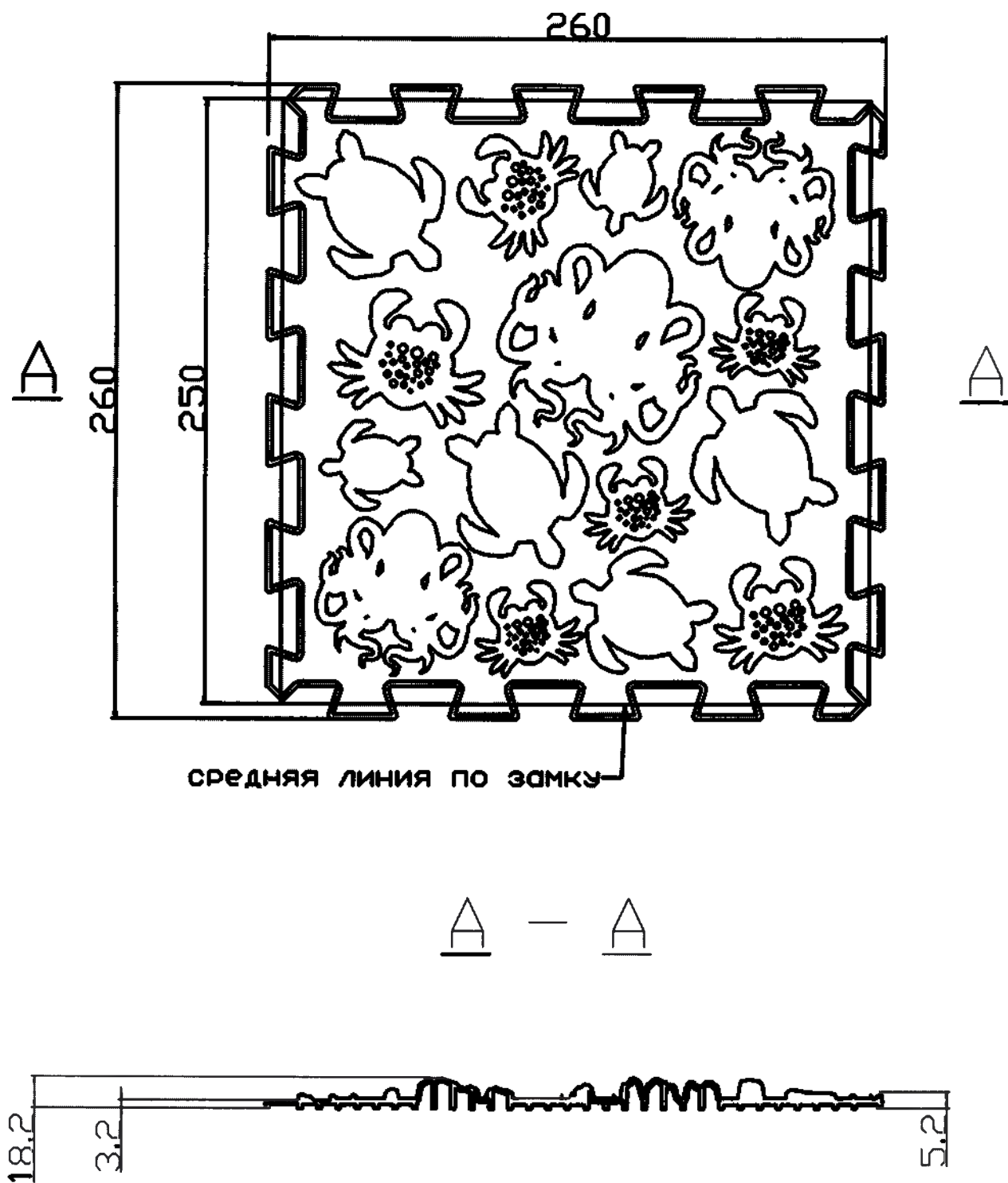


Рисунок А11 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Морское дно»

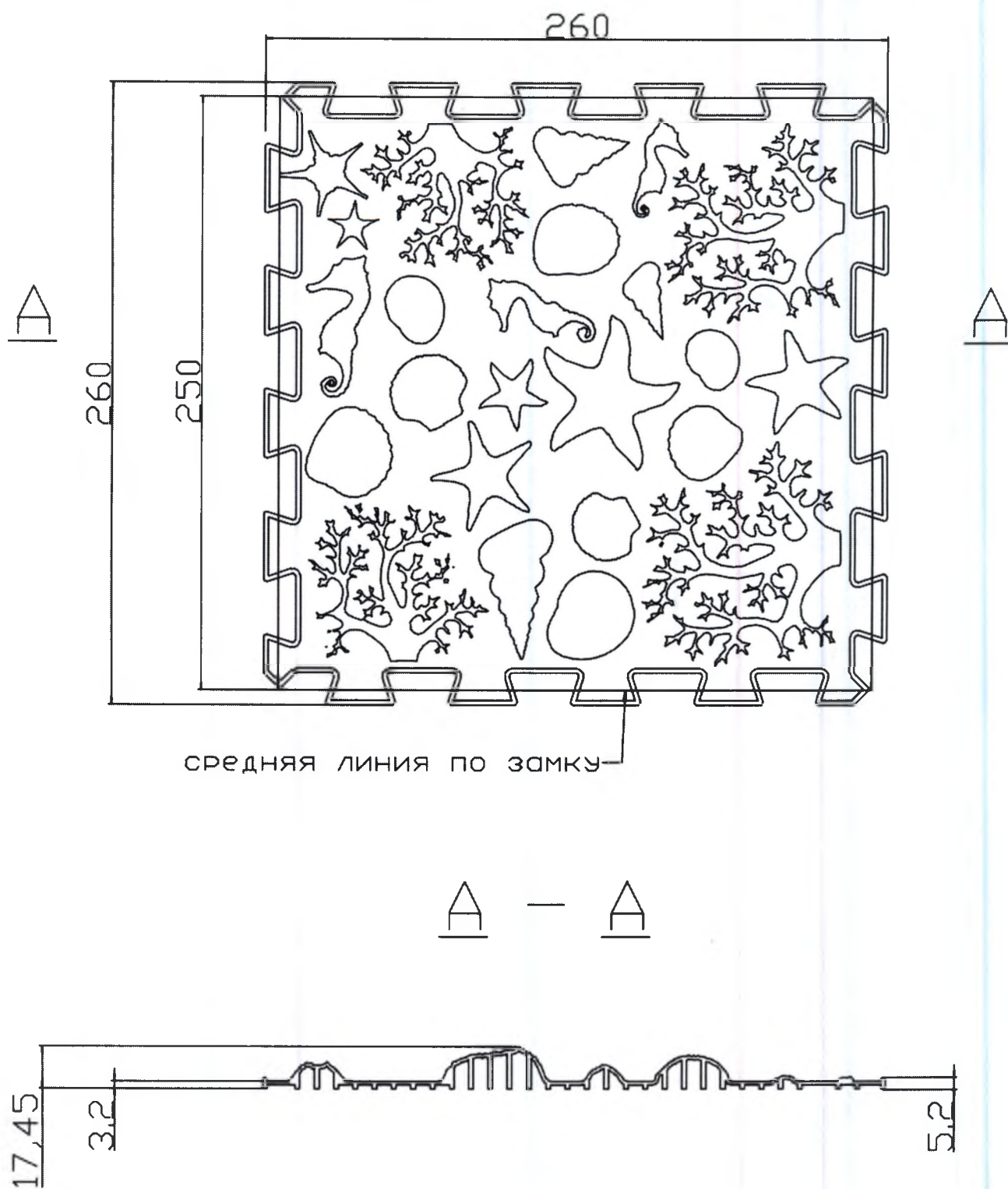


Рисунок А12 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Морской риф»


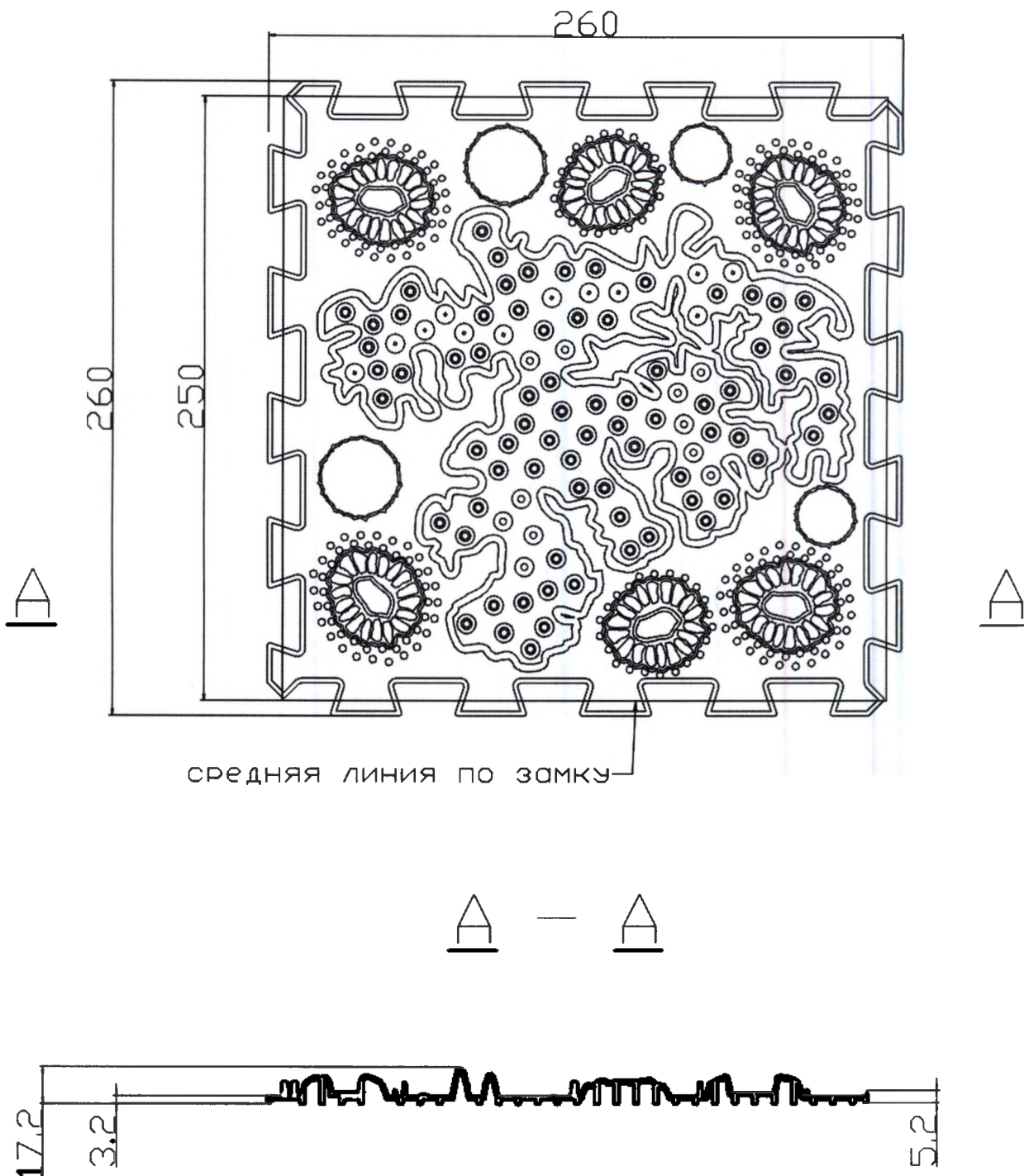


Рисунок А13 - Геометрические размеры и общий вид массажного модуля «Морская волна»

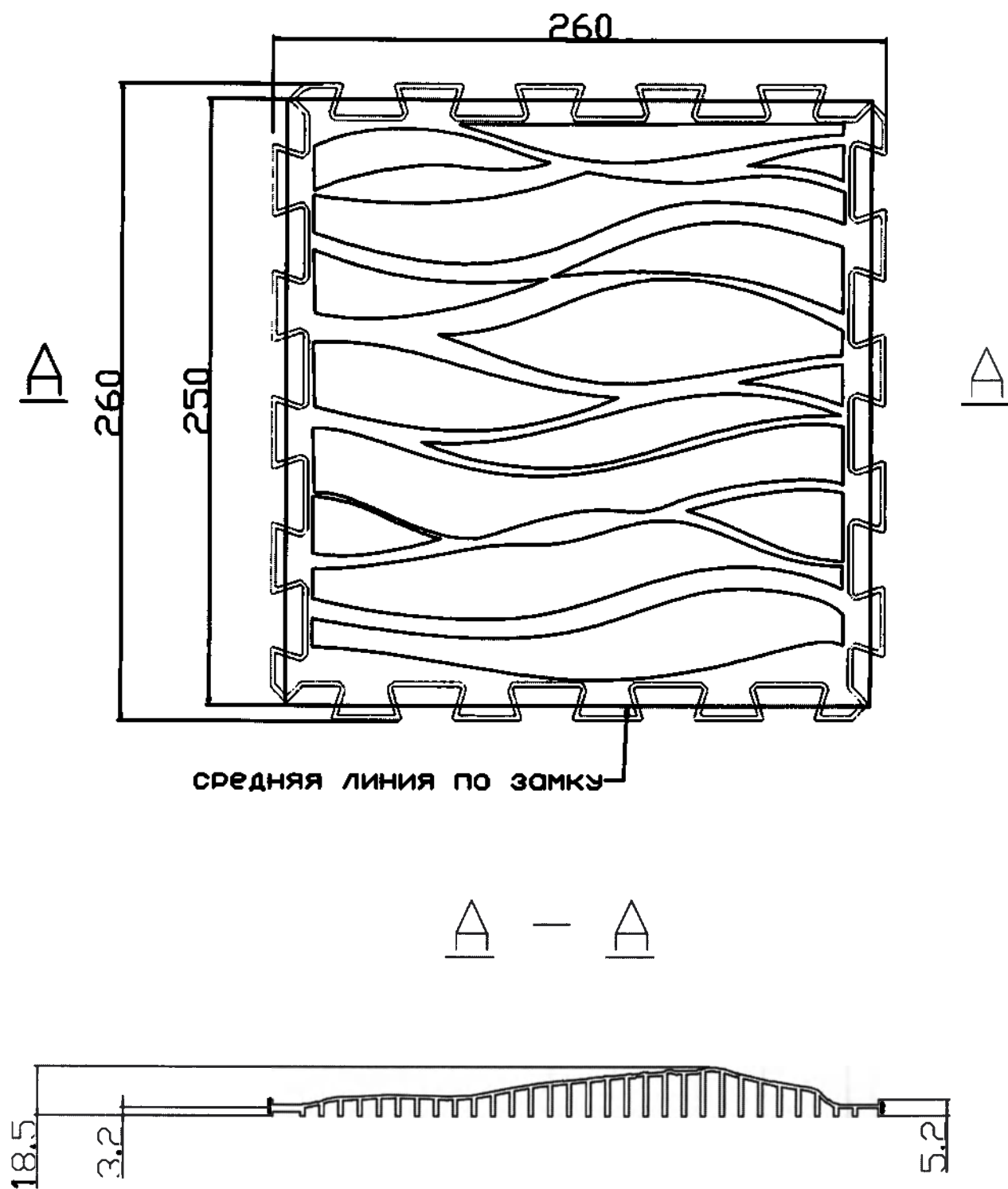

Перечень применяемых производителем медицинского изделия национальных стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ТУ 2246-001-46017230-2002	Пластикат поливинилхлоридный стабилизированный для производства обуви методом литья
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 33781-2016	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ ISO 10993-1-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)
Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ГОСТ Р 12.0.001-2013	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Основные положения
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)
ГН 2.2.5.1313-2003	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.2.5.2308-2007	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
СП 52.13330.2011	Естественное и искусственное освещение.
СанПиН 2.2.4.548-96	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
ГОСТ 17.2.3.02-2014	Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
ГН 2.1.6.1338-2003	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ГН 2.1.6.2309-2007	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ГН 2.1.5.1315-2003	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
ГН 2.1.5.2307-2007	Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 29329-92	Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ 263-75	Резина. Метод определения твердости по Шору А (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 10905-86	Плиты поверочные и разметочные. Технические условия (с Изменением N 1)
ГОСТ 11262-80	Пластмассы. Метод испытания на растяжение (с Изменением N 1)
ГОСТ 5378-88	Угломеры с нониусом. Технические условия
ТУ 9392-089-05784466-2005	Дезинфицирующее средство "АЛАМИНОЛ"

Всего прошнуровано и скреплено печатью

43 (сорок три) лист а

ООО «ЛидерПолимер»

Управляющий - индивидуальный предприниматель

 Гацкан О. В.

«УТВЕРЖДАЮ»
ООО «ЛидерПолимер»
Управляющий-индивидуальный предприниматель
Гацкан Олег Владимирович



«19» мая 2017 г.

Паспорта медицинского изделия

**Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017**

2017

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____

Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Ёжики»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

ПУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Ёжики» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жёсткие Кактусы»	2 шт.
	Модуль «Мягкие Кактусы»	2 шт.
	Модуль «Жёсткие Ёжики»	2 шт.
	Модуль «Мягкие Ёжики»	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____

Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Лес»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Лес» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жёсткая Трава»	2 шт.
	Модуль «Жёсткие Шипы»	2 шт.
	Модуль «Жёсткие Шишки»	2 шт.
	Модуль «Мягкие Шишки»	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU й составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____

Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Морские Камни»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Морские Камни» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкие Морские Камни»	4 шт.
	Модуль «Жёсткие Морские Камни»	4 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Первые шаги»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Первые шаги» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкая Трава»	2 шт.
	Модуль «Галька»	2 шт.
	Модуль «Подсолнух»	2 шт.
	Модуль «Бабочка»	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Универсальный»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Универсальный» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жёсткая Трава»	2 шт.
	Модуль «Жёсткие Шипы»	2 шт.
	Модуль «Жёсткие Шишки»	2 шт.
	Модуль «Мягкие Ёжики»	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Море»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Море» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Морское Дно»	2 шт.
	Модуль «Морской Риф»	2 шт.
	Модуль «Океан»	2 шт.
	Модуль «Морская Волна»	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Тропа Здоровья»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Тропа Здоровья» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жёсткие Кактусы»	4 шт.
	Модуль «Жёсткие Ёжики»	4 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, МИКС «Саванна»
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	МИКС «Саванна» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкие Морские Камни»	2 шт.
	Модуль «Мягкие Кактусы»	2 шт.
	Модуль «Жёсткие Морские камни»	2 шт.
	Модуль «Мягкие Ёжики»	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ЖКК
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Жёсткие Кактусы» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жёсткие Кактусы»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МКК
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Мягкие Кактусы» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкие Кактусы»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ЖЁЖ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Жёсткие Ёжики» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жёсткие Ёжики»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п. 1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п. 1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МЁЖ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Мягкие Ёжики» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкие Ёжики»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ЖТР
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Жесткая Трава» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жесткая Трава»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ЖШП
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Жесткие Шипы» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жесткие Шипы»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ЖШШ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Жесткие Шишки» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жесткие Шишки»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МШШ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Мягкие Шишки» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкие Шишки»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ММК
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT _____  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Мягкие Морские Камни» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкие Морские Камни»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ЖМК
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Жесткие Морские Камни» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Жесткие Морские Камни»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МТР
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Мягкая Трава» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Мягкая Трава»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ГЛ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Галька» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Галька»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ПД
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Подсолнух» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Подсолнух»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ББ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Бабочка» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Бабочка»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МД
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Морское Дно» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Морское Дно»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МР
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Морской Риф» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Морской Риф»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8ОК
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

LOT  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Океан» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Океан»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛидерПолимер»

Юр. адрес: Россия, 350049, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, дом 177, офис 3
Адрес производства: Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, ул.
Войкова, 136-138

тел.: +7 (863) 333-02-04
e-mail: info@liderpolymer.ru

Паспорт качества № _____
Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, 8МВ
наименование продукции

ТУ 32.50.22-003-229575282-2017

РУ № _____ от _____

  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.	Комплект «Морская Волна» в составе:	
	Наименование	Кол-во, шт
	Модуль «Морская Волна»	8 шт.
	Эксплуатационная документация	
	Руководство пользователя	1 шт.
	Паспорт	1 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1	Размеры и общий вид изделия	п.1.1.2	Соответствует
2	Масса	п. 1.1.3	Соответствует
3	Вариант цветового исполнения	п. 1.1.4	Соответствует
4	Комплектность	п. 1.4.1	Соответствует
5	Маркировка	п.1.5.2	Соответствует
6	Упаковка	п. 1.7	Соответствует

Изделие соответствует ТУ 32.50.22-003-229575282-2017.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения изделий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Всего прошнуровано и скреплено печатью

27 (двадцать семь) лист 06

ООО «ЛидерПолимер»

Управляющий - индивидуальный предприниматель

Гацкан О. В.