

ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор



Е.Т. Игткин

2011 г.

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ
ЭкА (НЕРТУТНЫЙ)

Руководство по эксплуатации

АЖТ 4.177.007 РЭ

АЖТ 4.177.007РЭ

Термометр медицинский максимальный стеклянный ЭкА (нертутный)

Регистрационное удостоверение Минздрава РФ №

ГОСТ Р 52921-2008/ТУ 9441-034-31881402-2011

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



— ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начальное значение шкалы от 32°C до 35°C

Конечное значение шкалы 42°C

Цена деления шкалы 0,1°C

2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Измерение проводить в следующей последовательности:

- взять термометр за верхний конец и опустить его резервуаром вниз;
 - приложив усилие встряхнуть рукой термометр так, чтобы мениск столбика термометрической жидкости оказался ниже цифровой отметки 35,5°C по шкале;
 - установить термометр резервуаром в центр подмышечной впадины/паха человека и прижать рукой/ногой для фиксации термометра. Избегать сильного давления на термометр;
 - выдержать термометр около 5 минут;
 - удалить термометр из подмышечной впадины/паха и отсчитать температуру по шкале.
- Данную процедуру необходимо выполнять для каждого измерения температуры.
- У ослабленных больных при измерении температуры необходимо придерживать руку.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

- 1) После принятия ванны или душа следует отложить измерение температуры на 30 минут.
- 2) В случае неожиданного повышения или понижения температуры рекомендуется повторить измерение несколько раз через небольшие промежутки времени.

АЖТ 4.177.007РЭ

					Термометр медицинский максимальный стеклянный ЭкА (нертутный) Руководство по эксплуатации		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:1
					Лист 1	Листов 5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Стекланникова	А.М.С.	6.12.11				
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.	Иткин		6.12.11				

3) После применения термометр обязательно продезинфицировать: в бытовых условиях – обмыванием теплой водой с мылом, в лечебных учреждениях – в соответствии с инструкцией по дезинфекции.

4) Температуру рекомендуется измерять 2 раза в день: в 7–8 часов утра и 17–19 часов вечера.

5) Записывайте время и результаты измерения, чтобы, в случае необходимости, показать их врачу.

4. ГРУДНЫЕ ДЕТИ И ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Способ измерения температуры годен для грудных детей и детей младшего возраста.

При измерении температуры у детей рекомендуется фиксировать термометр в подмышечной впадине/паху, придерживая руку ребенка за предплечье или ногу за бедро.

5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ

5.1. НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

1) Температура тела изменяется в течение дня до 2°C. Как правило, она ниже всего утром и выше всего во второй половине дня.

2) Нормальная температура 36,6°C. При измерении в подмышечной впадине разница между утренней и вечерней температурой у здоровых людей не превышает 0,6°C.

5.2. ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Высокая температура тела, как правило, является следствием инфекций, травм, обезвоживания (обезвоживания организма), теплового удара и т.д. и может варьировать между 37,2°C и 41,5°C.

5.3. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ (ГИПОТЕРМИЯ)

Пониженная температура (ниже 36,6°C) может проявляться в совершенно здоровом состоянии.

Однако при температуре тела ниже 35°C следует незамедлительно обратиться к врачу.



ВНИМАНИЕ !

ХРАНИТЕ ТЕРМОМЕТР В НЕДОСЯГАЕМОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Обращайтесь с термометром осторожно.

При разрушении термометра осколки стекла и термометрическую жидкость собрать с помощью ткани, смоченной этиловым спиртом. Сбор производить в защитных перчатках.

Осколки стекла и собранную термометрическую жидкость вместе с тканью временно хранить в полиэтиленовой емкости с крышкой, а затем сдать в организацию, занимающуюся сбором и утилизацией таких отходов.

Разбитый термометр не представляет опасности для окружающей среды и для здоровья человека.

Обработку термометра проводить только утвержденными дезинфицирующими средствами.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЖТ 4.177.007РЭ

Лист

2

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

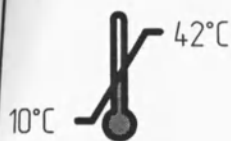

Хранить термометр в предназначенном для этого футляре в прохладном месте. При чрезмерном нагревании термометр может разрушиться. Разрыв столбика термометрической жидкости в капиллярной трубке над резервуаром с термометрической жидкостью не является дефектом, он типичен для термометров с максимальным устройством. Разбитые термометры являются специальными отходами и их утилизация должна производиться в соответствии с определенными нормами и правилами.

Термометры следует транспортировать и хранить только в вертикальном или наклонном положении с предохранением от атмосферных осадков.

Температура окружающей среды при транспортировании – от плюс 5°C до плюс 42°C. Период транспортирования при указанных условиях – не более трех суток.

Температура окружающей среды при хранении – не ниже плюс 10°C и не выше плюс 42°C.

Термометры для измерения температуры являются точными приборами. Результаты измерения точны при правильном пользовании прибором в соответствии с данным руководством.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления (дата на оболочке термометра в рамке клейма: одна римская цифра – квартал, две цифры – год изготовления).

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.



ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
Россия, 141600, Московская обл., г. Клин
Волоколамское шоссе, 44
тел. (495) 223-08-40, (49624) 2-31-55
факс (49624) 2-10-45
E-mail: sales@thermopribor.com
WEB: www.thermopribor.com



ИМЮ2


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЖТ 4.177.007РЭ

Лист
3

АЖТ 4.177.007РЭ

Текст руководства
по эксплуатации

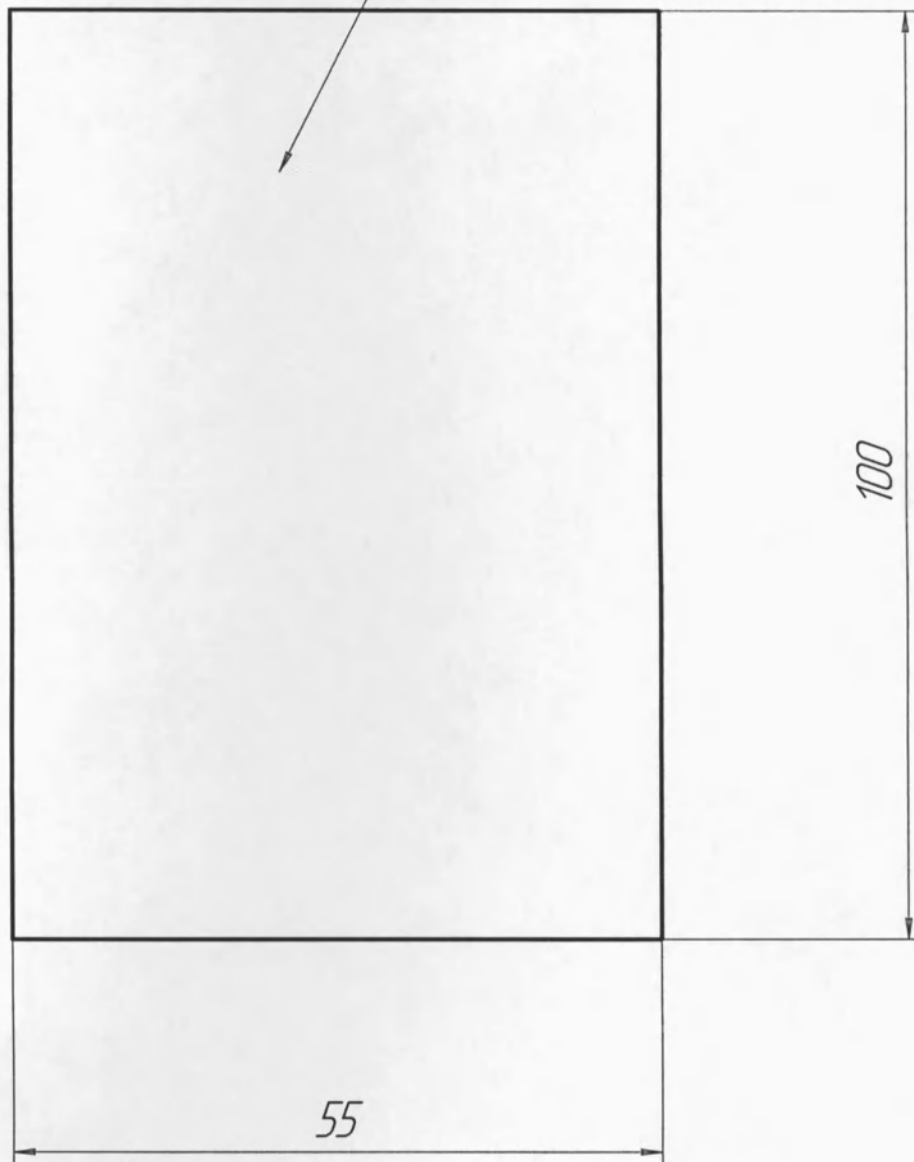

1. Печать руководства двусторонняя, дизайн согласно утвержденного образца.

2. Материал для печати руководства – бумага афишная ГОСТ 11836–76.

Допускается применение бумаги другой марки с плотностью не менее $(60-65) \text{ г/м}^2$.

АЖТ 4.177.007РЭ

Лист

4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Сшито и заверено печатью 5
(печ) лист об



Иткин С.Г.