

Նոտարական ակտի կոդ
Код нотариального акта

431-20240712-66-8124607



Նոտարական ակտի գաղտնագիր
Пароль нотариального акта

7X6T1G

«ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի (իրավաբանական հասցեն՝ ք.Երևան, Բաֆֆու փողոց 111, գրանցված՝ 07.06.2016թ. ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում, գրանցման համար՝ 290.110.912407, ՀՎՀՀ՝ 01271352) տնօրեն՝ ՍՈՒՐԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՑ, ծնված՝ 04/02/1963թ., ՀԵՀ՝ 1402630425, նույնականացման քարտ՝ 009728197, տրված՝ 004-ի կողմից, 08/12/2017թ., հաշվառված՝ ք.Երևան, Հակոբյան փողոց 1-82 հասցեում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, ք.Երևան Երկու հազար քսանչորս թվականի հուլիսի տասներկուին 12.07.2024թ.

ես՝ ՍՈՒՐԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, հանդիսանալով «ԱՐԻԴԵՍ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության տնօրեն, հայտնում եմ, որ կից ներկայացվող «Barry բժշկական բազմոց-զուգարան պատկանելիքներով» բժշկական արտադրանքի շահագործման ուղեցույցը կազմվել է «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի մասնագետների կողմից, որը 03.07.2024թ.-ին հաստատվել և ստորագրվել է իմ կողմից:

Որի համար ստորագրում եմ:

Перевод с армянского

От директора ООО «АРИДЕС» (юридический адрес: г. Ереван, ул. Раффи 111, зарегистрировано 07.06.2016г. в государственном регистре юридических лиц РА, регистрационный номер: 290.110.912407, ИНН: 01271352) САРГСЯНА СУРЕНА РОБЕРТОВИЧА, 04.02.1963 года рождения, НПУ: 1402630425, идентификационная карта: 009728197, выдана 08.12.2017г. органом 004, зарегистрированного по адресу: город Ереван, ул. Акобян, 1-82.

ЗАЯВЛЕНИЕ

РА г. Ереван Двенадцатого июля две тысячи двадцать четвертого года 12.07.2024г.

Я, САРГСЯН СУРЕН РОБЕРТОВИЧ, являясь директором ООО «АРИДЕС», настоящим заявляю, что приложенное руководство по эксплуатации на медицинское изделие "Кресло-туалет медицинский Вагу с принадлежностями" составлено специалистами ООО «АРИДЕС», которое заверено и подписано мной 03.07.2024г.

Под чем и подписываюсь.

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

подпись




Երկու հազար քսանչորս թվականի հուլիսի տասներկուսին:
Ես՝ ՀՀ «Երևան» նոտարական տարածքի նոտար՝ ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՍ
վավերացնում եմ՝ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ ՍՈՒՐԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ստորագրության
խսկությունը, որը կատարվել է իմ ներկայությամբ: «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 67
հոդվածի համաձայն վավերացնում եմ որոշակի անձի կողմից կատարված ստորագրության
խսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում շարադրված փաստերը: Նրա ինքնությունը և
գործունակությունը, լիազորությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձի
իրավունակությունը ստուգված է: Գրանցված է գրանցամատյանում՝ **3904**: Գանձված է
պետական տուրք հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար մեկ հազար ՀՀ դրամ,
համաձայն «Պետական Տուրքի» և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների:

ՆՈՏԱՐ



ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Двенадцатого июля две тысячи двадцать четвертого года

Я, ГРИГОРЯН АРМЕН СУРЕНОВИЧ, нотариус нотариальной территории Ереван РА, удостоверяю
подлинность подписи директора ООО «АРИДЕС» САՐԳՏՅԱՆ ՍՐԵՆ ՐՈԲԵՐՏՈՎԻՇԱ, который был
сделан в моем присутствии. Согласно статье 67 Закона РА «О нотариате», свидетельствую
подлинность подписи, сделанной определенным лицом, а не изложенные в нем факты. Его
личность и дееспособность, полномочия, а также правоспособность юридического лица
проверены. Зарегистрировано в реестре за **3904**. Взыскана государственная пошлина пятьсот
драм РА и оплата за услуги одна тысяча драм РА, согласно законам РА «О государственной
пошлине» и «О нотариате».

НОТАРИУС



ГРИГОРЯН АРМЕН СУРЕНОВИЧ



ARIDES LLC (ООО «АРИДЕС»)

ул. Раффи 111, Малатия – Себастья, 0064,
Ереван, Республика Армения



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «АРИДЕС»

Саргсян С.Р.

«03» июля 2024 г.

Руководство по эксплуатации

на медицинское изделие:

«Кресло-туалет медицинский Баргу с принадлежностями»

Производства

ARIDES LLC (ООО «АРИДЕС»).

Республика Армения

2024



ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Оглавление

1. Описание и работа.....	4
1.1 Наименование медицинского изделия и комплект поставки.....	4
1.2 Назначение медицинского изделия	7
1.3 Область применения	7
1.4 Классификация медицинского изделия.....	8
1.5 Условия эксплуатации	8
1.6 Принцип работы	8
1.7 Основные свойства медицинского изделия и показания	9
1.8 Технические характеристики	10
1.8.1 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC100	10
1.8.2 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC101	12
1.8.3 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC200	16
1.8.4 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC201	19
1.8.5 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC302	23
1.8.6 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC313	25
1.8.7 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC500	27
1.8.8 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC510	30
1.8.9 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC511	32
1.8.10 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC600	36
1.8.11 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC700	37
1.8.12 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC802	39
1.8.13 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC600w	42
1.8.14 Кресло-туалет медицинский Вагу, вариант исполнения Вагу WC610	43
1.9 Состав изделия.....	45
1.10 Маркировка.....	81
1.11 Упаковка.....	97
2. Сборка кресла-туалета	98
3. Требования к техническому обслуживанию и ремонту	104
4. Транспортировка	104
5. Условия и срок хранения.....	105
6. Стерильность	105
7. Дезинфекция	105
8. Утилизация и порядок осуществления уничтожения	105
9. Перечень нормативной документации	106
10. Гарантийные обязательства.....	106
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	107
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	107
11. Контактная информация.....	107

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик медицинского изделия «Кресло-туалет медицинский Вагу с принадлежностями» и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания. К работе с медицинским изделием допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации, и прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.

Версия: 1.00.6

Дата: 03.07.2024

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»

ООО «АРИДЕС» (ARIDES Limited liability company (ARIDES LLC))

Ул. Раффи, 111, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения

(111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia)

тел.: +37460 52 99 50

e-mail: info@arides.am

сайт: www.arides.am

Место производства:

Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»

ООО «АРИДЕС» (ARIDES Limited liability company (ARIDES LLC))

Ул. Раффи, 111, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения

(111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia)

тел.: +37460 52 99 50

e-mail: info@arides.am

сайт: www.arides.am

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ (УПП):

Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»),

125430, г. Москва, улица Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

тел.: +7(495)792-31-90

e-mail: info@sims2.ru

сайт: www.sims2.ru

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

1. Описание и работа

1.1 Наименование медицинского изделия и комплект поставки

«Кресло-туалет медицинский Баргу с принадлежностями» (Далее – кресло-туалет).
Кресло-туалет может поставляться в следующих исполнениях:

I. Кресло-туалет медицинский Баргу, вариант исполнения Баргу WC100 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Поручень с подлокотником – 2 шт.
3. Ножка выдвижная – 4 шт.
4. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
7. Спинка – 1 шт.
8. Комплект крепежных изделий, в составе: винт М6×35 – 6 шт., шайба ø 6 мм – 6 шт., гайка М6 – 6 шт.
9. Резиновая насадка – не более 40 шт. (при необходимости).
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

II. Кресло-туалет медицинский Баргу, вариант исполнения Баргу WC101 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Поручень с подлокотником – 2 шт.
3. Ножка выдвижная – 4 шт.
4. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
7. Спинка – 1 шт.
8. Колесо самоориентирующееся WC201 – не более 20 шт. (при необходимости).
9. Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B – не более 20 шт. (при необходимости).
10. Колесо самоориентирующееся U – не более 20 шт. (при необходимости).
11. Колесо самоориентирующееся с тормозом UB – не более 20 шт. (при необходимости).
12. Комплект крепежных изделий, в составе: винт М6×35 – 6 шт., шайба ø 6 мм – 6 шт., гайка М6 – 6 шт.
13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

III. Кресло-туалет медицинский Баргу, вариант исполнения Баргу WC200 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Поручень с подлокотником – 2 шт.
3. Ножка выдвижная – 4 шт.
4. Спинка – 1 шт.
5. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).
7. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

8. Комплект крепежных изделий, в составе: винт М6×50 – 8 шт., шайба ø 6 мм – 8 шт., гайка М6 – 8 шт.

9. Резиновая насадка – не более 40 шт. (при необходимости).

10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

IV. Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC201 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.

2. Поручень с подлокотником – 2 шт.

3. Ножка выдвижная – 4 шт.

4. Спинка – 1 шт.

5. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).

6. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).

7. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).

8. Колесо самоориентирующееся WC201 – не более 20 шт. (при необходимости).

9. Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B – не более 20 шт. (при необходимости).

10. Колесо самоориентирующееся U – не более 20 шт. (при необходимости).

11. Колесо самоориентирующееся с тормозом UB – не более 20 шт. (при необходимости).

12. Комплект крепежных изделий, в составе: винт М6×50 – 8 шт., шайба ø 6 мм – 8 шт., гайка М6 – 8 шт.

13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

V. Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC302 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.

2. Ножка выдвижная – 4 шт.

3. Спинка – 1 шт.

4. Сиденье с крышкой WC300 – не более 10 шт. (при необходимости).

5. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).

6. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).

7. Резиновая насадка – не более 40 шт. (при необходимости).

8. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

VI. Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC313 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.

2. Поручень – 2 шт.

3. Ножка выдвижная – 4 шт.

4. Спинка – 1 шт.

5. Сиденье с крышкой WC300 – не более 10 шт. (при необходимости).

6. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).

7. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).

8. Резиновая насадка – не более 40 шт. (при необходимости).

9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

VII. Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC500 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Ножка выдвижная – 4 шт.
3. Спинка – 1 шт.
4. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
7. Резиновая насадка WC500 – не более 40 шт. (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

VIII. Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC510 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Ножка выдвижная – 4 шт.
3. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
4. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Резиновая насадка – не более 40 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

IX. Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC511 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Ножка выдвижная – 4 шт.
3. Сиденье с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
4. Сиденье с крышкой WC – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Колесо самоориентирующееся WC201 – не более 20 шт. (при необходимости).
7. Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B – не более 20 шт. (при необходимости).
8. Колесо самоориентирующееся U – не более 20 шт. (при необходимости).
9. Колесо самоориентирующееся с тормозом UB – не более 20 шт. (при необходимости).
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

X. Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC600 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Сиденье WC600 – не более 10 шт. (при необходимости).
3. Сиденье WC – не более 10 шт. (при необходимости).
4. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Пластиковая насадка WC600 – не более 40 шт. (при необходимости).

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

XI. Кресло-туалет медицинский Barгу, вариант исполнения Barгу WC700 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Ножка выдвижная – 4 шт.
3. Сиденье WC700 – не более 10 шт. (при необходимости).
4. Ведро с крышкой WC700 – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Резиновая насадка WC700 – не более 40 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

XII. Кресло-туалет медицинский Barгу, вариант исполнения Barгу WC802 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Ножка выдвижная – 4 шт.
3. Спинка – 1 шт.
4. Сиденье WC802 – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
6. Резиновая насадка – не более 40 шт. (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защита от брызг – не более 10 шт.

XIII. Кресло-туалет медицинский Barгу, вариант исполнения Barгу WC600w в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Сиденье WC600 – не более 10 шт. (при необходимости).
3. Сиденье WC – не более 10 шт. (при необходимости).
4. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
5. Пластиковая насадка WC600 – не более 40 шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

XIV. Кресло-туалет медицинский Barгу, вариант исполнения Barгу WC610 в составе:

1. Рама туалета – 1 шт.
2. Сиденье WC – не более 10 шт. (при необходимости).
3. Ведро с крышкой – не более 10 шт. (при необходимости).
4. Пластиковая насадка WC610 – не более 40 шт. (при необходимости).
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

1.2 Назначение медицинского изделия

Кресло-туалет предназначен для медицинской реабилитации инвалидов в связи с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, больных после перенесенных травм и операций, в качестве стационарного или передвижного санитарно-гигиенического приспособления, применяемого вне ванной комнаты, в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

1.3 Область применения

Потенциальными потребителями медицинского изделия являются люди с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Кресла-туалеты могут быть использованы в стационарах лечебно-профилактических учреждений, отделениях реабилитации, травматологии и ортопедии, наркологических и психоневрологических диспансерах, паллиативных отделениях, хосписах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, учреждениях восстановительной терапии инвалидов молодого возраста, а также для ухода за пациентами в домашних условиях.

1.4 Классификация медицинского изделия

- Разработка, производство и продажа изделия соответствует требованиям: ISO 9001:2015. Номер сертификата 01 100 1615085. Дата вступления в силу: 2023-08-09, действителен до 2026-07-10, нотифицированный орган TUV Rheinland Cert GmbH.

- Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 32.50.50.190.

- Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ № 4н от 06.06.2012 г. - 1

- Классификация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 г. № 4н - 220280

1.5 Условия эксплуатации

Следите, чтобы все части медицинского изделия были в целости.

Температура воздуха от 5°C до +40°C

Относительная влажность от 20% до 70% (неконденсирующаяся)

Атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться только квалифицированными специалистами в сервисных центрах.

Срок эксплуатации медицинского изделия: 5 лет

Меры предосторожности при применении:

- К сборке и эксплуатации кресло-туалета допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию кресла-туалета и правила ее эксплуатации.
- При перемещении кресло-туалета необходимо отключить тормоза на всех колесах. Запрещается перемещать кресло-туалет с включенным тормозом колес.
- Перед использованием необходимо проверить целостность резиновых насадок.
- Не превышать максимальную нагрузку.

1.6 Принцип работы

Принцип действия

Специальный стул со встроенным отсеком под выносное ведро для кала/мочи предназначенный для сбора испражнений инвалидов с колёсными шасси и без.

Способ применения

Поручни используются пациентом для более комфортного расположения на Кресле-туалете, а также для более удобного процесса размещения.

Спинка используется для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле-туалете, предотвращая возможность падения назад.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье используется для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.

Ведро с крышкой используется для сбора испражнений из организма больного.

Саморегулирующиеся колеса позволяют пациенту без усилий перемещать Кресло-туалет в любом направлении. В случае установки над напольным унитазом, колеса необходимо зафиксировать, имеющимся на них тормозом, что позволяет обезопасить использование кресла-туалета.

Для кресел-туалетов медицинских Barry в вариантах исполнения Barry WC100, Barry WC101, Barry WC200, Barry WC201, Barry WC302, Barry WC313, Barry WC500, Barry WC510, Barry WC511, Barry WC700, Barry WC802 во время эксплуатации возможно изменять высоту положения сиденья с помощью кнопки и ножек выдвижных с установленным шагом подъема.

Во время эксплуатации опционально пользователь может применить защиту от брызг для кресел-туалетов медицинских Barry в вариантах исполнения Barry WC100, Barry WC101, Barry WC200, Barry WC201, Barry WC302, Barry WC313, Barry WC500, Barry WC510, Barry WC511, Barry WC700, Barry WC802.

Для кресел-туалетов медицинских Barry во всех вариантах исполнения используется насадка на ножки для предотвращения скольжения, трения, а также для удобства эксплуатации.

1.7 Основные свойства медицинского изделия и показания

1.7.1 Стерильность

Медицинское изделие поставляется нестерильным.

1.7.2 Наличие лекарственных веществ

В данном медицинском изделии в качестве компонента не применяются вещества.

1.7.3 Содержание производных человеческой крови

Данное МИ не содержит крови или компонентов крови человека.

1.7.4 Содержание компонентов из тканей животного происхождения

Данное МИ не содержит компоненты, полученные из тканей животного происхождения.

1.7.5 Содержание фталатов

Данное МИ не содержит фталатов.

1.7.6 Содержание мутагенных и канцерогенных компонентов

Данное МИ не содержит мутагенных и канцерогенных компонентов.

1.7.7 Отношение к изделиям категории AP или APG.

Данное МИ не является изделием категории AP или APG.

1.7.8 Противопоказания

Противопоказания к применению отсутствуют.

1.7.9 Возможные побочные эффекты

При надлежащем уходе и техническом обслуживании в соответствии с руководством по эксплуатации, данное медицинское изделие не оказывает побочных действий.

1.7.10 Показания к применению

Данные кресла-туалеты были разработаны для физически слабых людей, нуждающихся в уходе в домашних условиях, а также в стационарных учреждениях.

Кресло-туалет выдается инвалидам при наличии: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженным нарушением

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

функций ходьбы и стояния; гемиплегии; паралича нижних конечностей; выраженного, значительно выраженного тетрапареза; выраженного, значительно выраженного трипареза; выраженного, значительно выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного, значительно выраженного гемипареза; выраженных, значительно выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных, значительно выраженных амиостатических нарушений; выраженных, значительно выраженных гиперкинетических нарушений; заболеваний сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 2, 3 стадии или стенокардией напряжения с функциональным классом III, IV; заболеваний органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени; заболеваний печени с нарушением функций печени тяжелой степени с портальной гипертензией и асцитом; заболеваний почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени; деменцией.

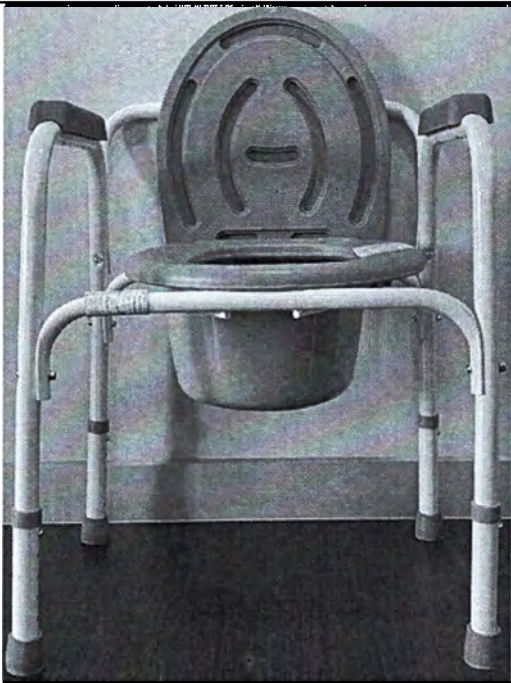
Данное кресло-туалет предназначено для использования пациентами, вес тела которых не выше 200 кг.

Вид контакта с организмом: Кратковременный, поверхностный контакт с кожей.

1.8 Технические характеристики

Технические характеристики медицинского изделия представлены в таблице ниже.

1.8.1 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC100

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	разборная
	Размеры корпуса профиля рамы, мм (±0,3), мм	1,2×22
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	528×530×700
	Диапазон регулировки ширины, не более, мм	От 511 до 530
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 600 до 700
	Масса изделия в сборе, не более, кг	6
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	410
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресло- туалета (от пола до сиденья), не более, мм	410+510

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресло-туалета без крепления, не более (Д×Ш×В), мм	405×387×20
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресло-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты подъема кресло-туалета	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	475
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съемные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	190
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более, мм	650
	Оснащение	Съемная санитарная емкость, сиденье кресла-туалета, крышка
	Возможность установить кресло над унитазом	Да (напольный унитаз)
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	480
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	560
	Габаритные размеры подлокотника, (Д $\times$ Ш $\times$ В), (± 10), мм	225 $\times$ 53 $\times$ 33
	Размер корпуса профиля поручня, мм ($\pm 0,3$), мм	1,2 $\times$ 25
	Высота от подлокотника до сиденья, (± 10), мм	170

1.8.2 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC101

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	разборная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2 $\times$ 25
	Габаритные размеры (Д $\times$ Ш $\times$ В), не более, мм	475 $\times$ 505 $\times$ 610
	Диапазон регулировки ширины, не более, мм	От 505 до 530

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 610 до 710
	Масса изделия в сборе, не более, кг	6
	Максимальное усилие, необходимое для перемещения кресла-туалета, не более, Н	400
	Максимальная нагрузка на сиденье, кг	100
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	140
	Высота от пола до сидения, минимальная, не более, мм	420
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 420 до 520
	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Масса крышки сиденья, не более кг	0,5

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	430
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съемные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	190
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650

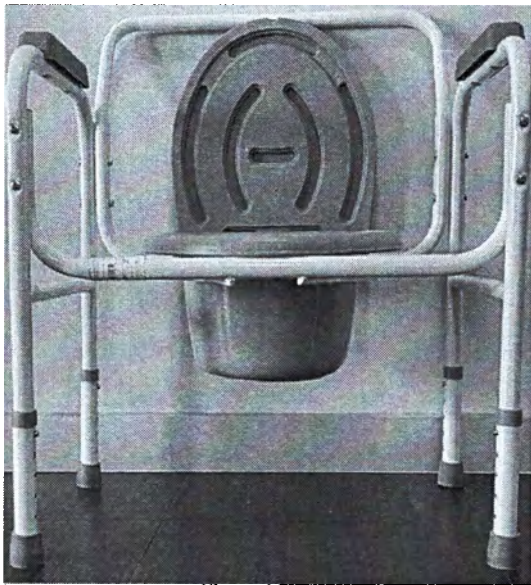
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Минимальная ширина поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 1100 мм	1100
	Тип колес	Самоориентирующееся
	Толщина колеса, не менее, мм	1 комплект – 30
		2 комплект - 15
	Общая высота колеса с тормозом с опорой, не более, мм	1 комплект – 160
		2 комплект - 165
	Максимальная нагрузка на колесо с тормозом, не более, кг	40
	Общий вес колеса с тормозом, не более, кг	0,27
	Диаметр колеса с тормозом, не менее, мм	100
	Усилие нажатия на тормоз стояночный, не более, Н	41
	Усилие снятия с тормоза стояночного, не более, Н	40
	Общая высота колеса без тормоза с опорой, не более, мм	125
	Максимальная нагрузка на колесо без тормоза, не более, кг	40
	Общий вес колеса без тормоза, не более, кг	1 комплект – 0,79
		2 комплект – 0,50
	Диаметр колеса без тормоза, не менее, мм	1 комплект – 95
		2 комплект - 100
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Возможность установить кресло над унитазом	Да (напольный унитаз)
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	430
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	480
	Габаритные размеры подлокотника, (Д $\times$ Ш $\times$ В), (± 10), мм	225 $\times$ 53 $\times$ 33
	Размер корпуса профиля поручня, мм ($\pm 0,3$), мм	1,2 $\times$ 25
	Высота от подлокотника до сиденья, (± 10), мм	160

1.8.3 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC200

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Разборная
	Размер корпуса профиля рамы, мм ($\pm 0,3$), мм	1,2 $\times$ 25
	Габаритные размеры (Д $\times$ Ш $\times$ В), не более, мм	673 $\times$ 481 $\times$ 780
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 780 до 880
	Масса изделия в сборе, не более, кг	8
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	180
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	480
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола	От 480 до 540

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	до сиденья), не более, мм	
	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Масса, не более, кг	0,5
	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресла-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более мм	620
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7

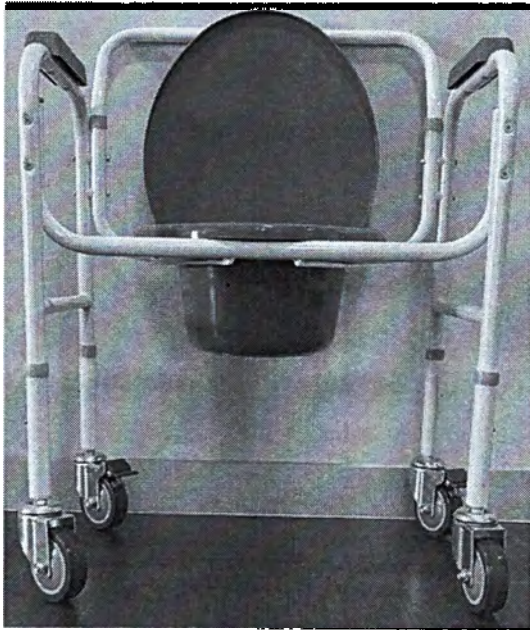
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съемные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	300
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	420
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	600
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (± 10), мм	225×53×33
	Размер корпуса профиля поручня, ($\pm 0,3$), мм	1,2×22 1,2×25

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Высота от подлокотника до сиденья, (± 10), мм	230
--	---	-----

1.8.4 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC201

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Разборная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2×25
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	670×530×840
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 730 до 840
	Масса изделия в сборе, не более, кг	10
	Максимальное усилие, необходимое для перемещения кресла-туалета, не более, Н	400
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	180
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	175
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	480
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 480 до 540
	Эффективная глубина сиденья	360

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	кресла-туалета, не менее, мм	
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	385
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Масса крышки сиденья, не более, кг	1
	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	620
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съёмные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	330
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов не более 650 мм	650
	Минимальная ширина поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов не более 1100 мм	1100
	Тип колес	Самоориентирующееся
	Толщина колеса, не менее, мм	1 комплект – 30
		2 комплект - 15
	Общая высота колеса с тормозом	1 комплект – 160

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	с опорой, не более, мм	2 комплект - 165
	Максимальная нагрузка на колесо с тормозом, не более, кг	60
	Общий вес колеса с тормозом, не более, кг	1 комплект – 0,79
		2 комплект – 0,50
	Диаметр колеса с тормозом, не менее, мм	1 комплект – 95
		2 комплект - 100
	Усилие нажатия на тормоз стояночный, не более, Н	1 комплект – 52
		2 комплект - 46
	Усилие снятия с тормоза стояночного, не более, Н	1 комплект - 26
2 комплект - 31		
Оснащение	Съёмная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка	
Возможность установить кресло над унитазом	Да (напольный унитаз)	
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (±10), мм	420
	Длина поручня подлокотника, (±10), мм	480
	Габаритные размеры подлокотника,	225×53×33

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	(Д×Ш×В), (±10), мм	
	Размер корпуса профиля поручня, (±0,3), мм	1,2×22
	Высота от подлокотника до сиденья, (±10), мм	230

1.8.5 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC302

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Неразборная конструкция
	Размер корпуса профиля рамы, (±0,3), мм	1,2×25
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	525×400×600
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 600 до 700
	Масса изделия в сборе, не более, кг	7
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	370
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 370 до 470
	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31

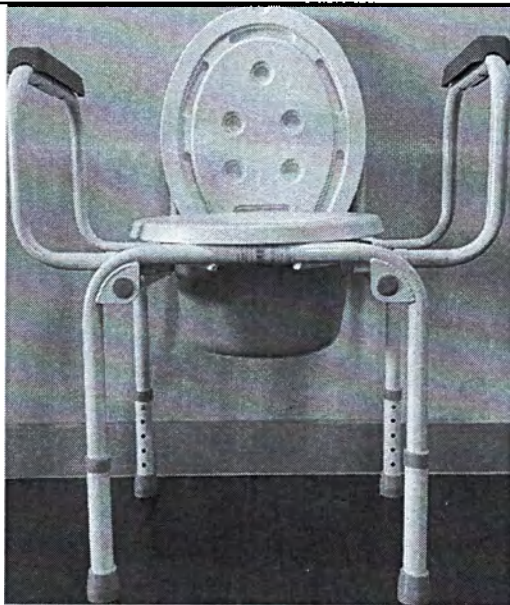
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Масса крышки сиденья, не более, кг	0,5
	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	450
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	500
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Складные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	180
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка
	Возможность установить кресло над унитазом	Нет
	Характеристики подлокотника	

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	310
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	280
	Габаритные размеры подлокотника, (диаметр×длина), (± 10), мм	35×260
	Размер корпуса профиля поручня, ($\pm 0,3$), мм	1,2×22
	Высота от подлокотника до сиденья, (± 10), мм	200

1.8.6 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC313

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Неразборная конструкция
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2×25
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	530×400×600
	Диапазон регулировки длины, не более, мм	От 530 до 630
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 600 до 700
	Масса изделия в сборе, не более, кг	7
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	370
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 370 до 470
	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета	405×387×20

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Масса крышки сиденья, не более, кг	0,5
	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
	Шаг регулировки по ширине, не более, мм	50
	Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	420
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Съемные

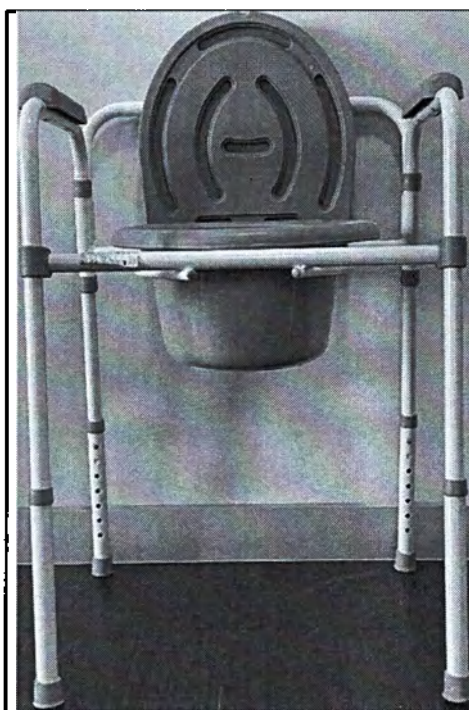
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	180
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка
	Возможность установить кресло над унитазом	Нет
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	330
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	180
	Габаритные размеры подлокотника, (Д $\times$ Ш $\times$ В), (± 10), мм	225 $\times$ 53 $\times$ 33
	Размер корпуса профиля поручня, ($\pm 0,3$), мм	1,2 $\times$ 22
	Высота от подлокотника до сиденья, (± 10), мм	200

1.8.7 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC500

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,0 $\times$ 25 1,2 $\times$ 22
	Габаритные размеры (Д $\times$ Ш $\times$ В), не более, мм	564 $\times$ 450 $\times$ 615
	Диапазон регулировки ширины, не более, мм	От 450 до 470
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 615 до 765

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024



Масса изделия в сборе, не более, кг	7
Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	60
Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	410
Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 410 до 540
Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления (Д×Ш×В), не более, мм	405×387×20
Жесткая крышка сиденья	Наличие
Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
Масса крышки сиденья, не более, кг	0,5
Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
Шаг подъема кресла-туалета, мм	25
Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
Расстояние между подлокотниками, не более, мм	511

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съемные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресла-туалета, не более, мм	205
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка
	Возможность установить кресло над унитазом	Да (напольный унитаз)
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (±10), мм	470
	Длина поручня подлокотника, (±10), мм	580
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (±10), мм	235×53×33
	Размер корпуса профиля поручня, (±0,3), мм	1,2×22
	Высота от подлокотника до сиденья, (±10), мм	180

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

1.8.8 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC510

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,0×28 1,225
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	543×473×720
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 720 до 820
	Масса изделия в сборе, не более, кг	7
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	115
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	450
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 450 до 540
	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Масса крышки сиденья, не более, кг	0,5
	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресла-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	490
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съемные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	270
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка
Возможность установить кресло над унитазом		Да (напольный унитаз)
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (±10), мм	370
	Длина поручня подлокотника, (±10), мм	640
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (±10), мм	218×53×33
	Размер корпуса профиля поручня, (±0,3), мм	1,2×25
	Высота от подлокотника до сиденья, (±10), мм	230

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

1.8.9 Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC511

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, (±0,3), мм	1,0×28 1,2×25
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	540×490×720
	Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 720 до 820
	Масса изделия в сборе, не более, кг	8
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	115
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	450
	Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 450 до 540
	Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не	405×387×20

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	более, мм (Д×Ш×В)	
	Жесткая крышка сиденья	Наличие
	Габаритный размер овальной крышки сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм	417×398×31
	Масса крышки сиденья, не более, кг	0,5
	Усилие открытия/закрытия крышки сиденья кресла-туалета (без фиксации), не более, Н	10
	Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
	Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
	Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	490
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съёмные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	270
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Минимальный радиус поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 650 мм	650
	Минимальная ширина поворота кресла-туалета, оснащенного колесами, при развороте на 360 градусов, не более 1100 мм	1100
	Тип колес	Самоориентирующееся
	Толщина колеса, не менее, мм	1 комплект – 30
		2 комплект - 15
	Общая высота колеса с тормозом с опорой, не более, мм	1 комплект – 160
		2 комплект - 165
	Максимальная нагрузка на колесо с тормозом, не более, кг	60
	Общий вес колеса с тормозом, не более, кг	1 комплект – 0,79
		2 комплект – 0,50

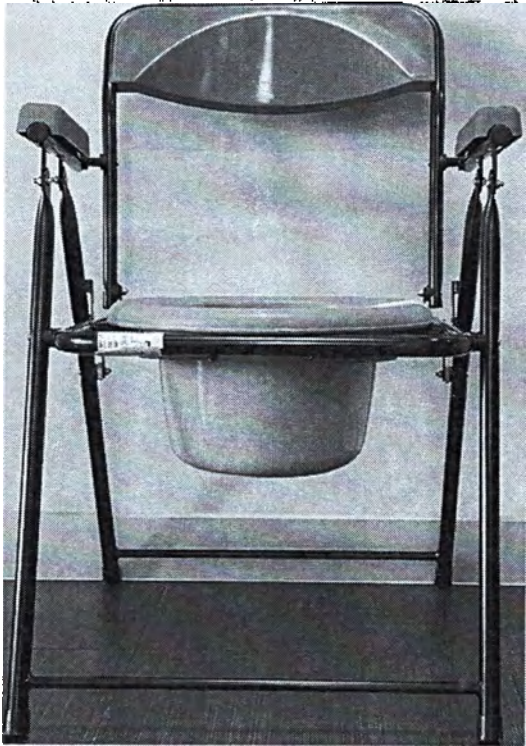
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Диаметр колеса с тормозом, не менее, мм	1 комплект – 95 2 комплект - 100
	Усилие нажатия на тормоз стояночный, не более, Н	41
	Усилие снятия с тормоза стояночного, не более, Н	40
	Общая высота колеса без тормоза с опорой, не более, мм	170
	Максимальная нагрузка на колесо без тормоза, не более, кг	60
	Общий вес колеса без тормоза (допуск $\pm 0,02$) не более, кг	0,51
	Диаметр колеса без тормоза, не менее, мм	100
	Оснащение	Съёмная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета, крышка
	Возможность установить кресло над унитазом	Да (напольный унитаз)
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	370
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	520
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (± 10), мм	218×53×33

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Размер корпуса профиля поручня, ($\pm 0,3$), мм	1,2×25
	Высота от подлокотника до сиденья, не более, (± 10), мм	230

1.8.10 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC600

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2×22 1,2×13
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	555×558×800
	Масса изделия в сборе, не более, кг	9
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	425
	Эффективная глубина сиденья кресла- туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	540
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника- резервуара), не более, л	7

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съёмные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	375
	Тип спинки кресла-туалета	Обычная
	Оснащение	Съёмная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета
	Возможность установить кресло над унитазом	Нет
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (±10), мм	310
	Длина поручня подлокотника, (±10), мм	100
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (±10), мм	225×53×33
	Размер корпуса профиля поручня, (±0,3), мм	1,2×22
	Высота от подлокотника о сиденья, (±10), мм	210

1.8.11 Кресло-туалет медицинский Baggy, вариант исполнения Baggy WC700

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, (±0,3), мм	1,2×25

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024



Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	650×560×870
Диапазон регулировки ширины, не более, мм	От 530 до 620
Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 870 до 960
Масса изделия в сборе, не более, кг	9
Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	450
Диапазон регулировки высоты сиденья кресла-туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 450 до 540
Эффективная глубина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	400
Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	420
Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	420×400×45
Шаг подъема кресло-туалета, мм	25
Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла-туалета, Н	Не более 41
Расстояние между подлокотниками, не более, мм	520
Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800

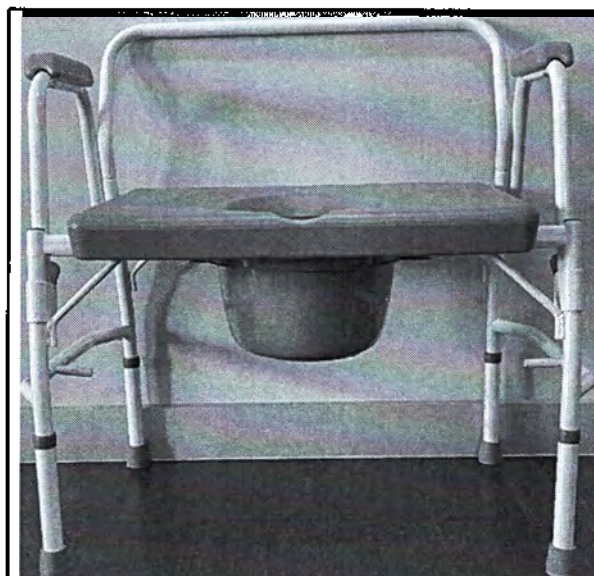
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Внешний диаметр ведра, не более, мм	310
	Внутренний диаметр ведра, не более, мм	250
	Высота ведра, не более, мм	165
	Цвет ведра	Серый
	Подлокотники (тип)	Не съёмные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресла-туалета, не более, мм	420
	Тип спинки кресла-туалета	Обычная
	Оснащение	Съёмная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета
	Возможность установить кресло над унитазом	Нет
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	25
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	425
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (± 10), мм	330×50×60
	Высота от подлокотника до сиденья, (± 10), мм	160

1.8.12 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC802

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Неразборная конструкция

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024



Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2×25 1,2×13
Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	650×500×740
Диапазон регулировки высоты подъема, не более, мм	От 740 до 840
Масса изделия в сборе, не более, кг	8
Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	200
Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	490
Диапазон регулировки высоты сиденья кресла- туалета (от пола до сиденья), не более, мм	От 490 до 540
Эффективная глубина сиденья кресла- туалета, не менее, мм	460
Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	560
Габаритный размер сиденья кресла- туалета без крепления, не более, мм (Д×Ш×В)	560×460×35
Шаг подъема кресло- туалета, мм	25
Механизм фиксатора высоты подъема кресла-туалета	Кнопка
Максимальное усилие нажатия на кнопку фиксатора высоты подъема кресла- туалета, Н	Не более 41

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	540
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Складные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресла-туалета, не более, мм	250
	Тип спинки кресла-туалета	Поясничная
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета
	Возможность установить кресло над унитазом	Да (напольный унитаз)
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (±10), мм	310
	Длина поручня подлокотника, (±10), мм	100
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (±10), мм	225×53×33

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Размер корпуса профиля поручня, ($\pm 0,3$), мм	1,2×22
	Высота от подлокотника о сиденья, (± 10), мм	210

1.8.13 Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC600w

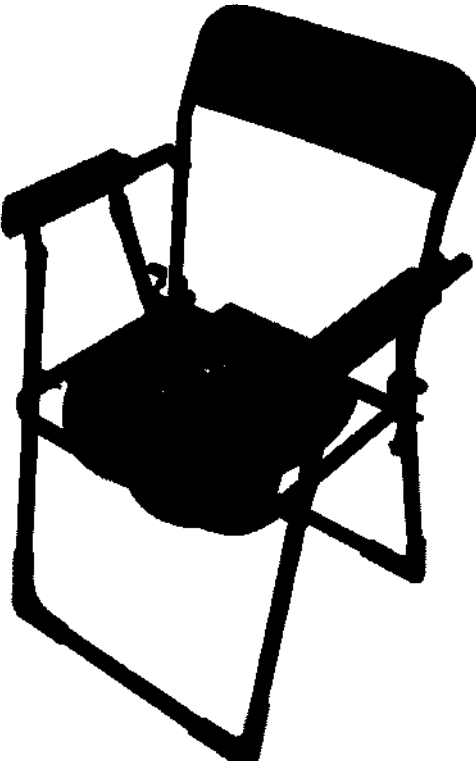
Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2×22 1,2×13
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	555×558×800
	Масса изделия в сборе, не более, кг	9
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
	Расстояние до нижнего фиксатора, не более, мм	50
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	425
	Эффективная глубина сиденья кресла- туалета, не менее, мм	387
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	405
	Габаритный размер сиденья кресла- туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	405×387×20
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	540
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Объем ведра (приемника-резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съёмные
	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	375
	Тип спинки кресла-туалета	Обычная
	Оснащение	Съёмная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета
	Возможность установить кресло над унитазом	Нет
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (±10), мм	310
	Длина поручня подлокотника, (±10), мм	100
	Габаритные размеры подлокотника, (Д×Ш×В), (±10), мм	225×53×33
	Размер корпуса профиля поручня, (±0,3), мм	1,2×22
	Высота от подлокотника о сиденья, (±10), мм	210

1.8.14 Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC610

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Изображение	Наименование параметра	Значение параметра
	Тип рамы	Складная
	Размер корпуса профиля рамы, ($\pm 0,3$), мм	1,2×22 1,2×19
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм	540×555×800
	Масса изделия в сборе, не более, кг	6
	Максимальная нагрузка на сиденье, не более, кг	100
	Высота от пола до сиденья минимальная, не более, мм	435
	Эффективная глубина сиденья кресла- туалета, не менее, мм	400
	Ширина сиденья кресла-туалета, не менее, мм	385
	Габаритный размер сиденья кресла-туалета без крепления, не более, мм, (Д×Ш×В)	400×385×20
	Расстояние между подлокотниками, не более, мм	455
	Максимальная нагрузка на подлокотники, не более, Н	800
	Объем ведра (приемника- резервуара), не более, л	7
	Максимальная весовая нагрузка ведра, не более, кг	3
	Диаметр ведра, не более, мм	300
	Высота ведра, не более, мм	163
	Цвет ведра	Голубой/серый
	Подлокотники (тип)	Не съёмные

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

	Высота верхней кромки спинки, расположенной над сиденьем кресло-туалета, не более, мм	375
	Тип спинки кресла-туалета	Обычная
	Оснащение	Съемная санитарная ёмкость, сиденье кресла-туалета
	Возможность установить кресло над унитазом	Нет
Характеристики подлокотника		
	Ширина поручня подлокотника, (± 10), мм	90
	Длина поручня подлокотника, (± 10), мм	310
	Габаритные размеры подлокотника, (Д $\times$ Ш $\times$ В), (± 10), мм	225 $\times$ 55 $\times$ 33
	Размер корпуса профиля поручня, ($\pm 0,3$), мм	1,2 $\times$ 22
	Высота от подлокотника о сиденья, (± 10), мм	220

**** - 1 комплект – колесо самоориентирующееся WC201; колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B**

2 комплект - колесо самоориентирующееся U; колесо самоориентирующееся UB с тормозом.

Стояночная тормозная система для вариантов исполнения Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511 обеспечивает надежное удержание нагруженного кресла-стула в заторможенном состоянии на плоскости с уклоном до 10°.

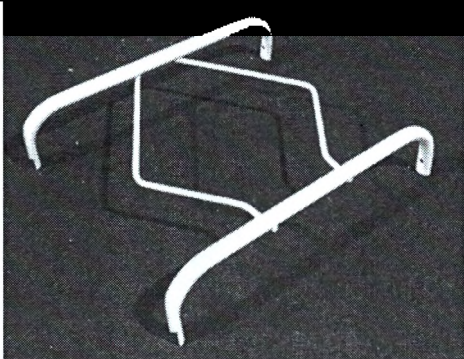
Для всех вариантов исполнения Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями:

- Долговечность сиденья, не менее 5000 циклов;
- Долговечность спинки, не менее 5000 циклов;
- Долговечность подлокотников, не менее 1500 циклов.

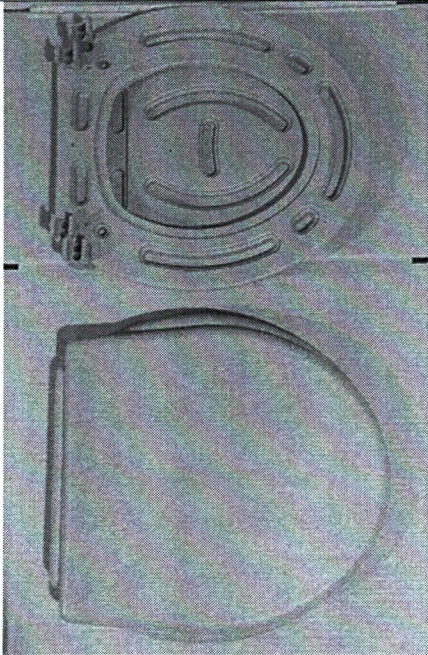
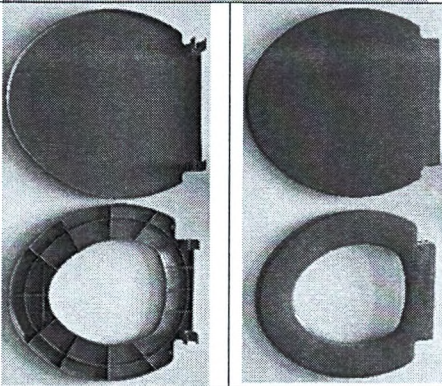
1.9 Состав изделия

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

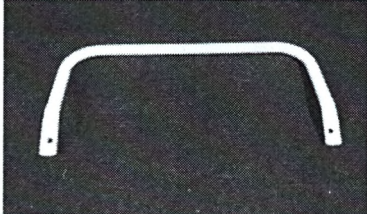
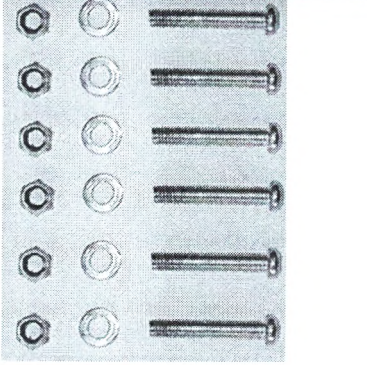
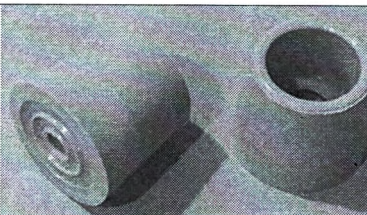
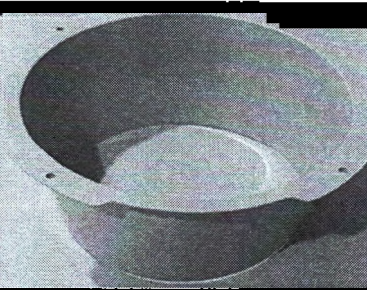
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Кресло-туалет медицинский Баргу, вариант исполнения Баргу WC100 в составе:		
Рама туалета		Конструкционный элемент
Поручень с подлокотником		Конструкционный элемент. Предназначен для более комфортного расположения на Кресле-туалете, а так для более удобного процесса размещения.
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

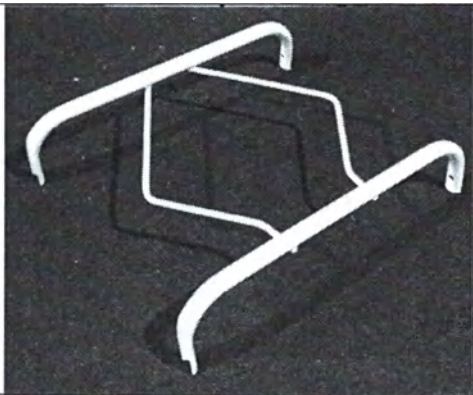
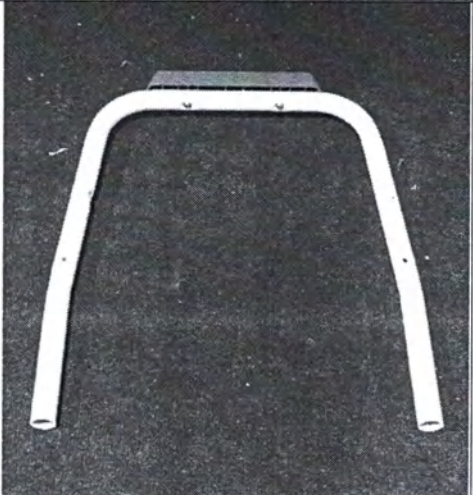
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье крышкой	с		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье крышкой WC	с		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро крышкой	с		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений

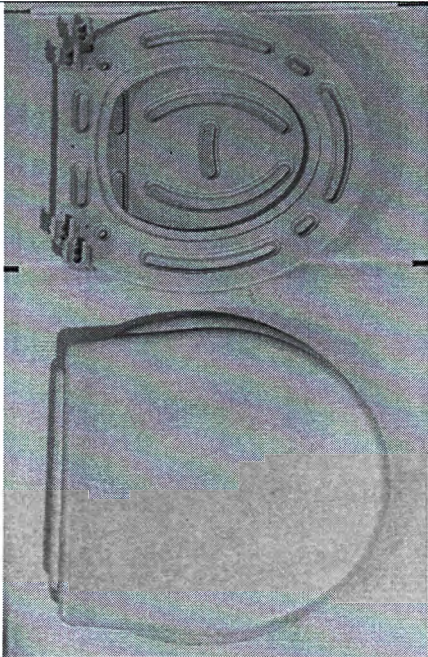
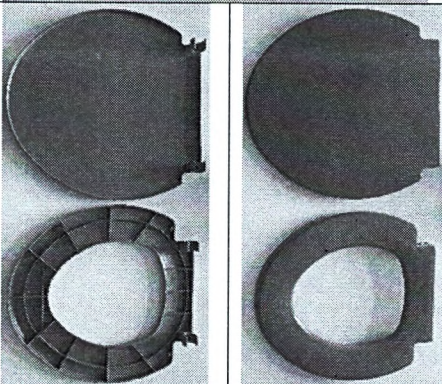
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

			
Спинка			Конструкционный элемент, предназначен для опоры и удобства эксплуатации
Комплект крепежных изделий			Предназначен для сборки и фиксации конструкции
Резиновая насадка			Используется для предотвращения скольжения/случайного сдвига конструкции
Принадлежности:			
Защита от брызг			Используется для предотвращения загрязнения
Кресло-туалет медицинский Ваггу с принадлежностями, вариант исполнения Ваггу WC101 в составе:			

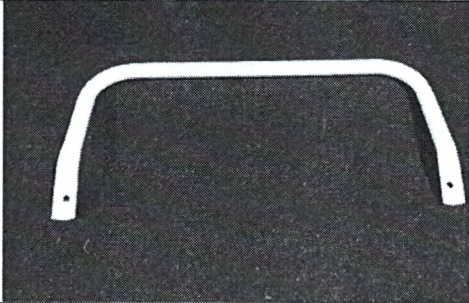
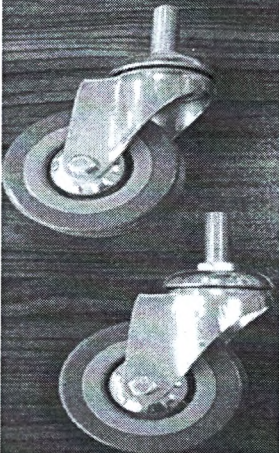
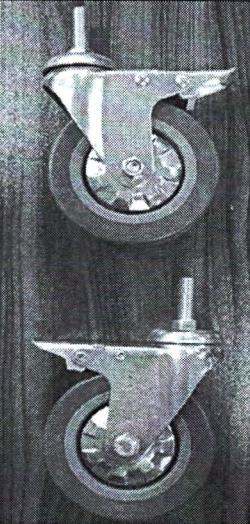
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Рама туалета		Конструкционный элемент.
Поручень с подлокотником		Конструкционный элемент. Предназначен для более комфортного расположения на Кресле-туалете, а так для более удобного процесса размещения.
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

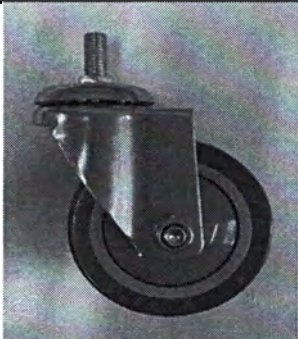
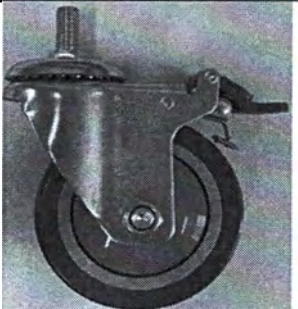
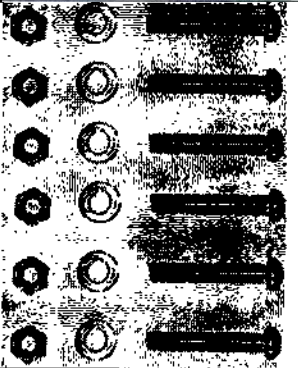
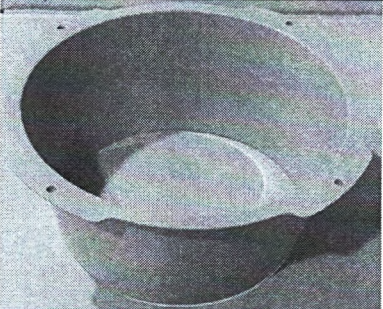
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье крышкой	с		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье крышкой WC	с		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро с крышкой			Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

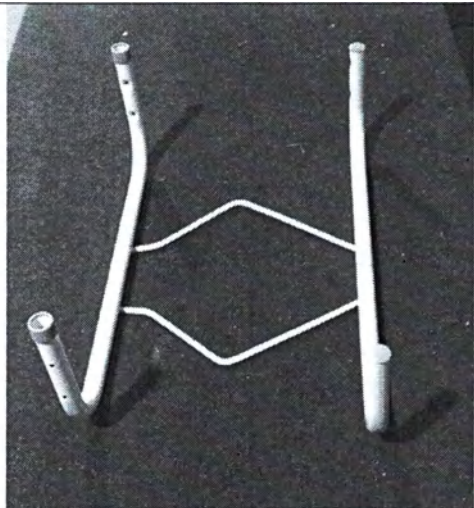
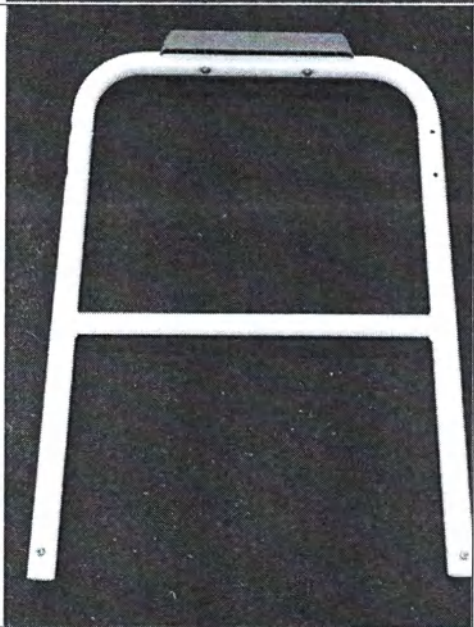
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

		
Спинка		Предназначена для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле-туалете, предотвращая возможность падения назад.
Колесо самоориентирующееся WC201		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета

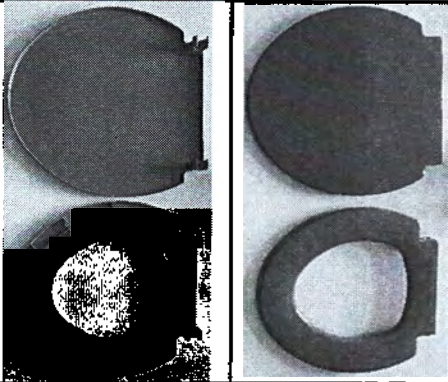
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Колесо самоориентирующееся U			Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентирующееся UB с тормозом			Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Комплект крепежных изделий			Предназначен для сборки и фиксации конструкции
Принадлежности:			
Защита от брызг			Используется для предотвращения загрязнения
Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC200 в составе:			

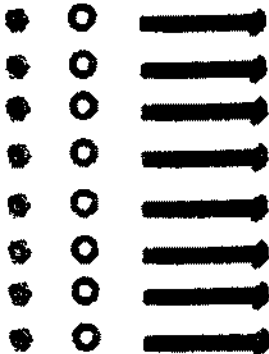
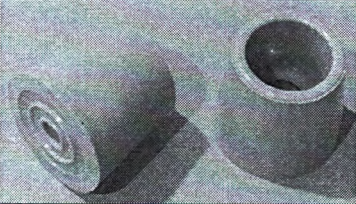
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Рама туалета		Конструкционный элемент
Поручень с подлокотником		Конструкционный элемент. Предназначен для более комфортного расположения на Кресле-туалете, а так для более удобного процесса размещения.
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

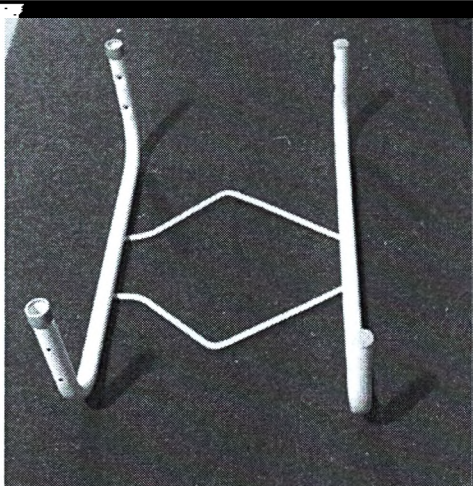
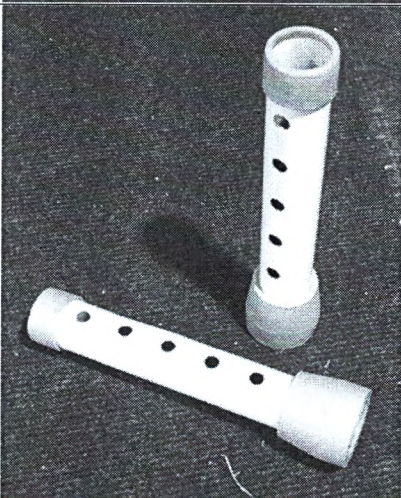
Спинка		Конструкционный элемент, предназначен для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле-туалете, предотвращая возможность падения назад.
Сиденье крышкой		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро крышкой		Ведро, цвет голубой или серый.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

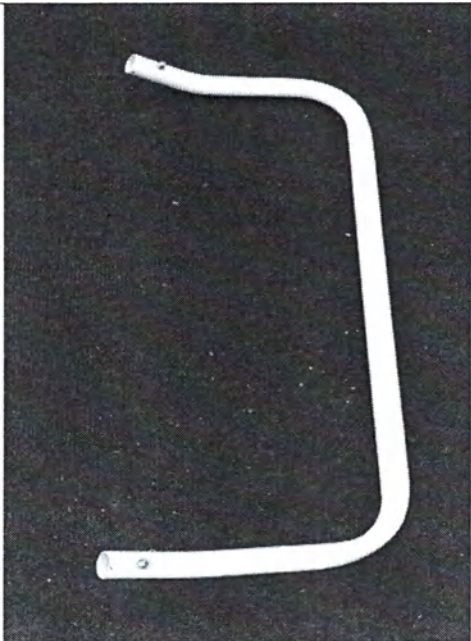
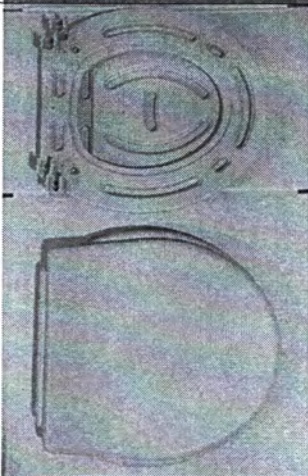
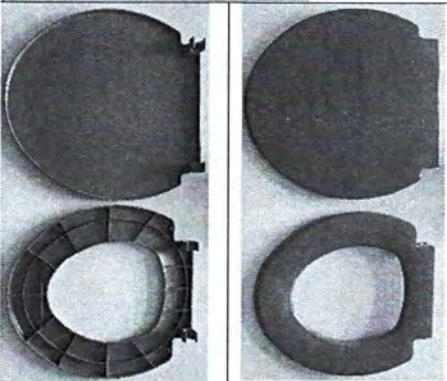
		Предназначено для сбора и выноса испражнений.
Комплект крепежных изделий		Предназначен для сборки и фиксации конструкции
Резиновая насадка		Используется для предотвращения скольжения конструкции
Принадлежности:		
Защита брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации

Кресло-туалет медицинский Baggy, вариант исполнения Baggy WC201 в составе:

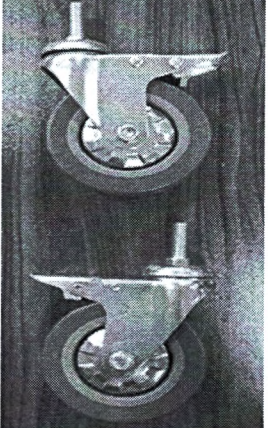
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Рама туалета		Конструкционный элемент
Поручень с подлокотником		Конструкционный элемент. Предназначен для более комфортного расположения на Кресле-туалете, а так для более удобного процесса размещения.
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

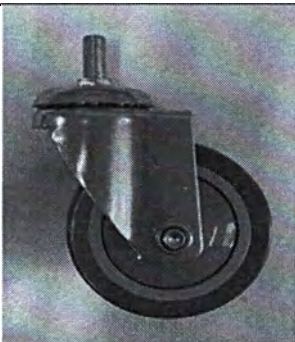
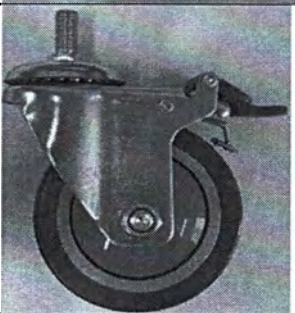
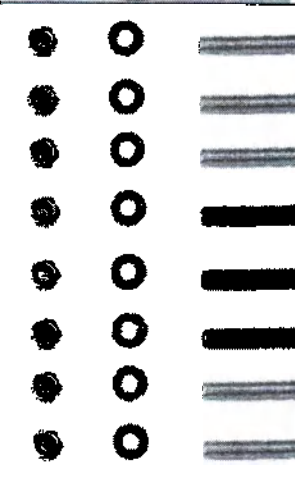
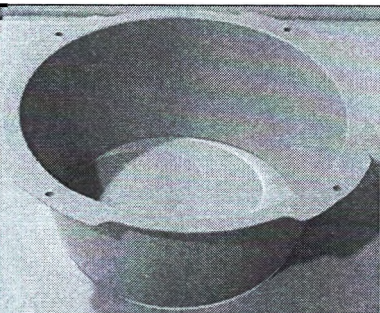
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Спинка		Конструкционный элемент, предназначен для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле-туалете, предотвращая возможность падения назад.
Сиденье с крышкой		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье с крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.

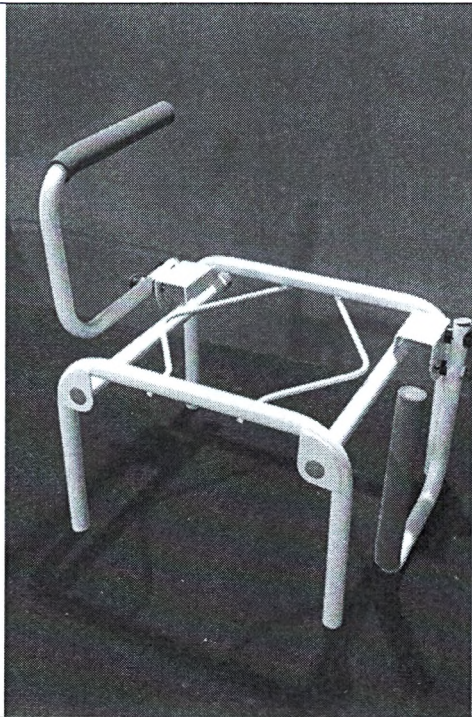
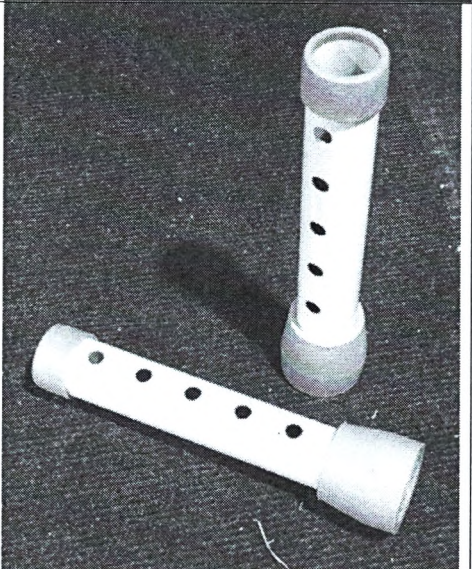
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Ведро с крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.
Колесо самоориентиру ющееся WC201		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентиру ющееся с тормозом WC201B		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета

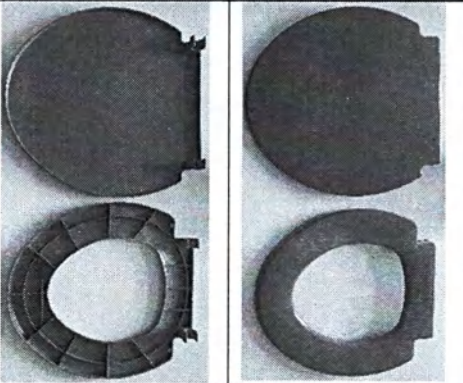
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Колесо самоориентирующееся U		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентирующееся UB с тормозом		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Комплект крепежных изделий		Предназначен для сборки и фиксации конструкции
Принадлежности:		
Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
Кресло-туалет медицинский Baggy, вариант исполнения Baggy WC302 в составе:		

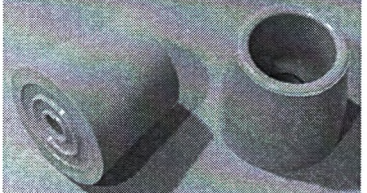
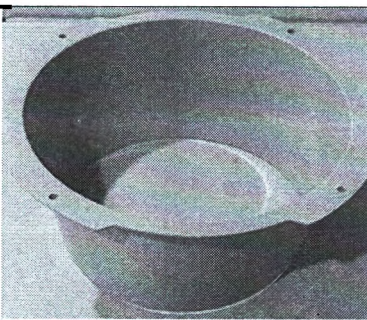
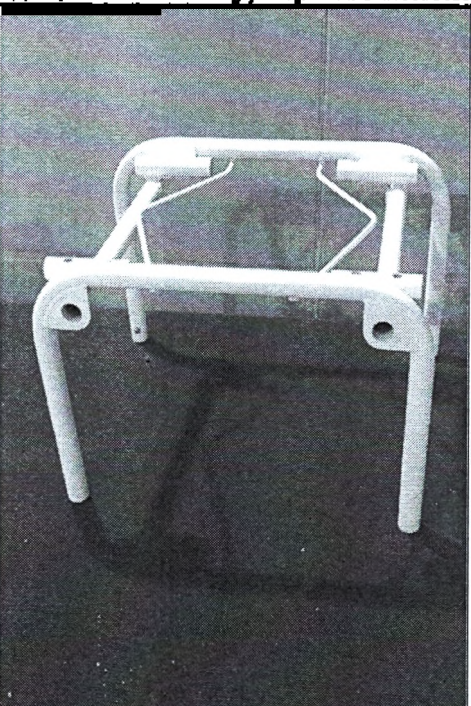
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

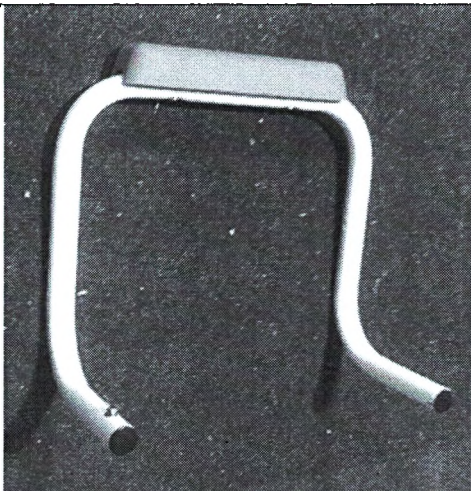
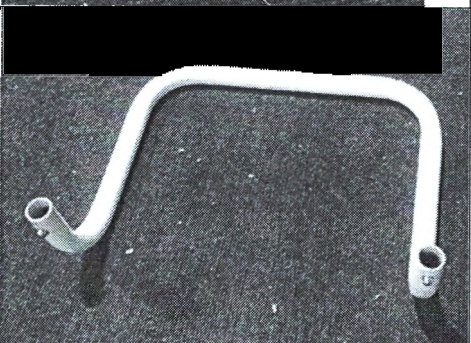
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье крышкой WC300		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье с крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Спинка		Конструкционный элемент, предназначен для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле- туалете, предотвращая возможность падения назад.
Ведро крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

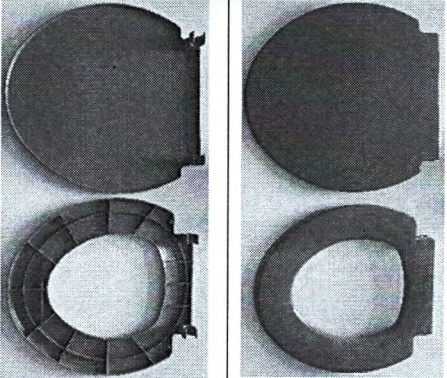
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

		
Резиновая насадка		Используется для предотвращения скольжения конструкции
Принадлежности:		
Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC313 в составе:		
Рама туалета		Конструкционный элемент

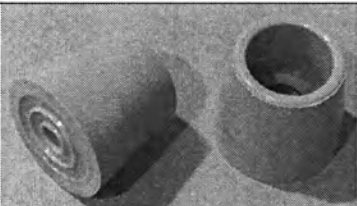
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Поручень с подлокотником		Конструкционный элемент. Предназначен для более комфортного расположения на Кресле-туалете, а так для более удобного процесса размещения и поддержки пациента
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета
Спинка		Конструкционный элемент, предназначен для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле- туалете, предотвращая возможность падения назад.

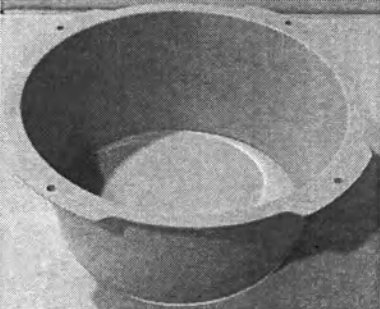
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье с крышкой WC300		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье с крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

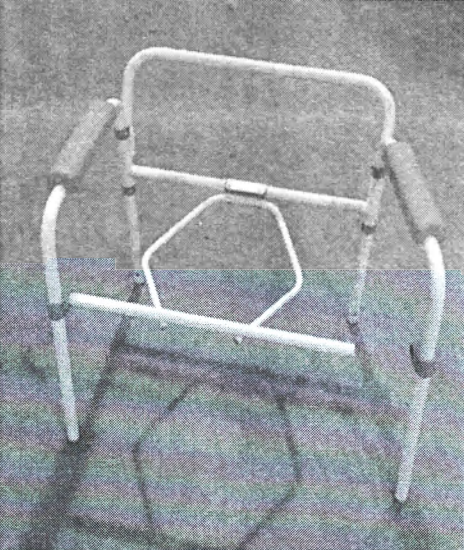
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Резиновая насадка		Используется для предотвращения скольжения конструкции
-------------------	---	--

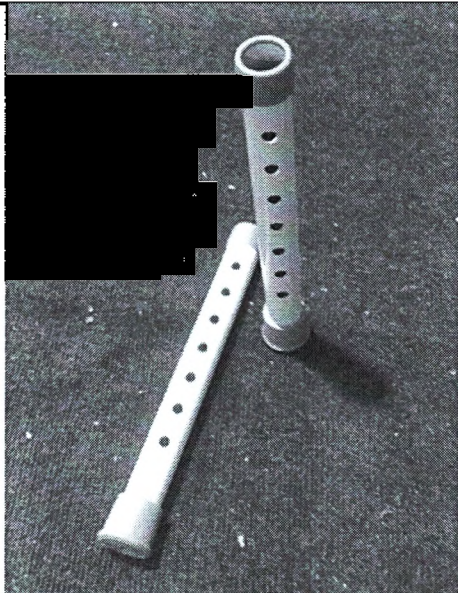
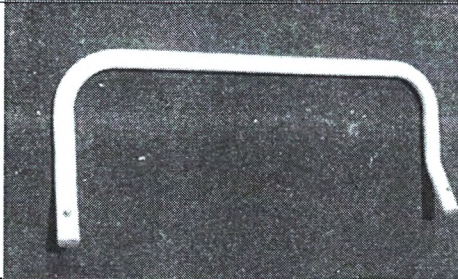
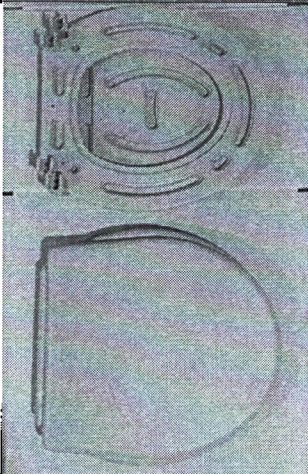
Принадлежности:

Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
-----------------	---	---

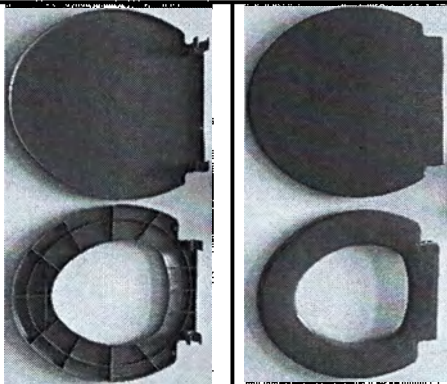
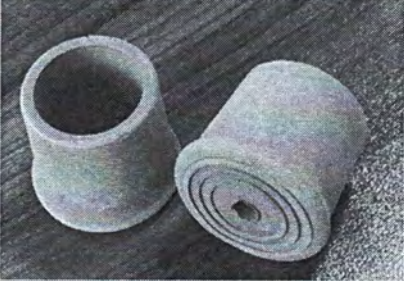
Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC500 в составе:

Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
--------------	---	---

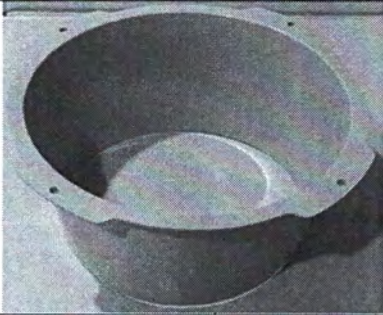
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета
Спинка		Конструкционный элемент, предназначен для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле- туалете, предотвращая возможность падения назад.
Сиденье с крышкой		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.

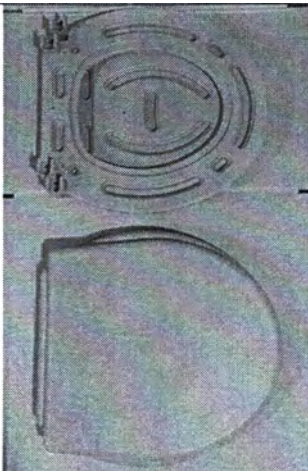
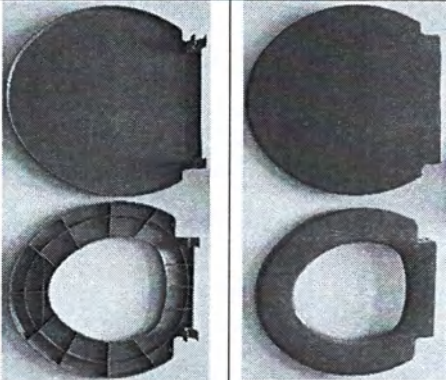
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье с крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро с крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.
Резиновая насадка WC500		Используется для предотвращения скольжения конструкции
Принадлежности:		

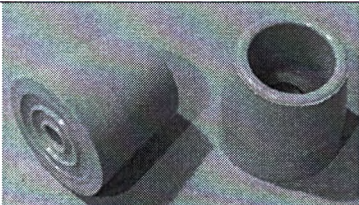
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC510 в составе:		
Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

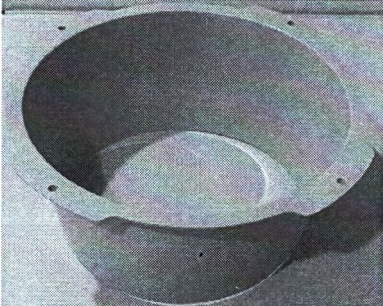
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье с крышкой		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье с крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро крышкой	с 	Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Резиновая насадка		Используется для предотвращения скольжения конструкции
-------------------	---	--

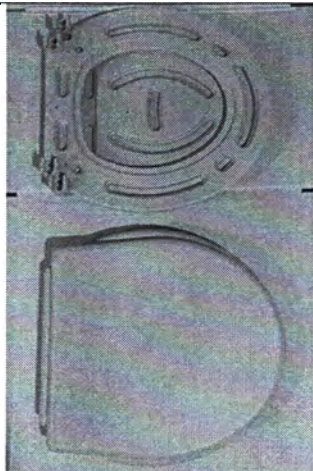
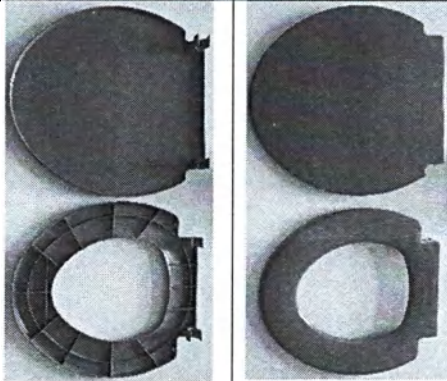
Принадлежности:

Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
-----------------	---	---

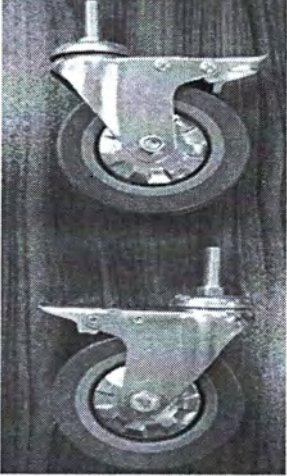
Кресло-туалет медицинский Baggy, вариант исполнения Baggy WC511 в составе:

Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента. Поручень с рамой являются единой конструкцией.
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета

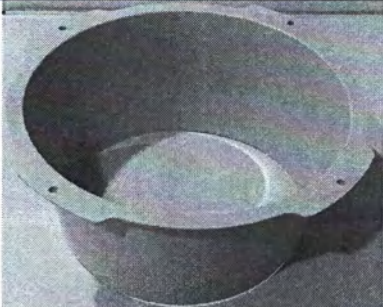
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье с крышкой		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье с крышкой WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

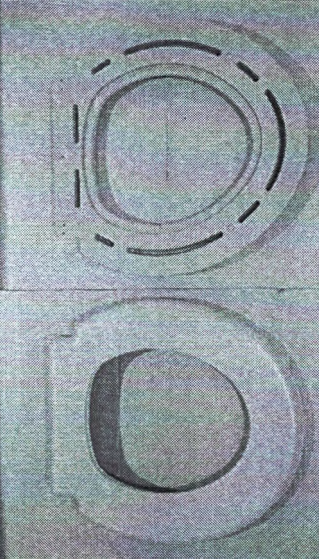
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Колесо самоориентирующееся WC201		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентирующееся U		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Колесо самоориентирующееся UB с тормозом		Предназначено для удобства перемещения кресло-туалета
Принадлежности:		

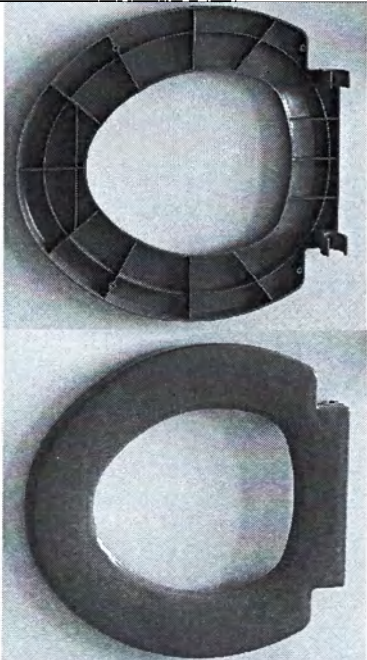
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
-----------------------	---	---

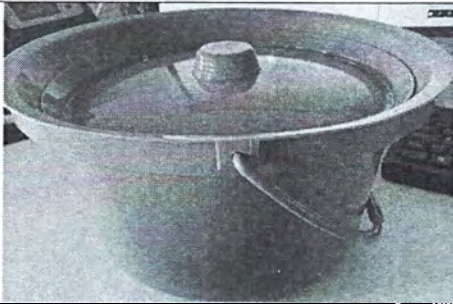
Кресло-туалет медицинский Баргу, вариант исполнения Баргу WC600 в составе:

Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
Сиденье WC600		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро с крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.
Пластиковая насадка WC600		Используется для предотвращения скольжения конструкции
Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC700 в составе:		

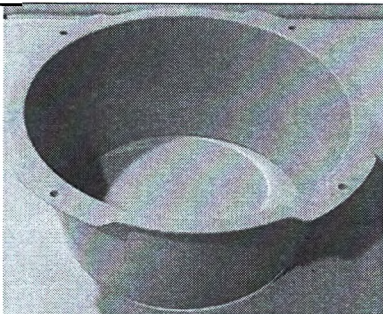
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета
Сиденье WC700		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро крышкой WC700		Ведро серого цвета. Предназначено для сбора и выноса испражнений

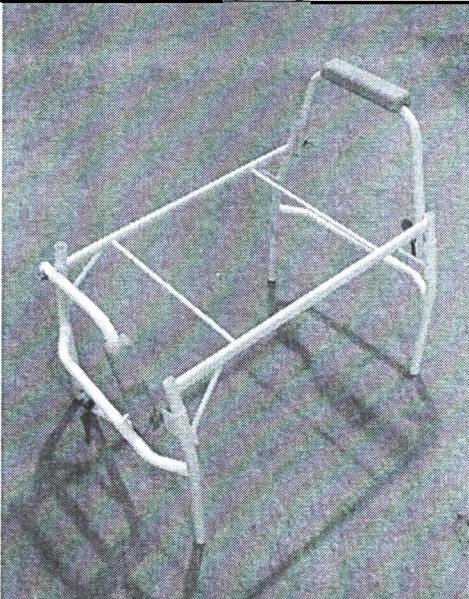
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Резиновая насадка WC700		Используется для предотвращения скольжения конструкции
-------------------------	---	--

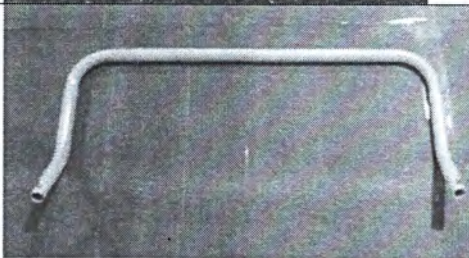
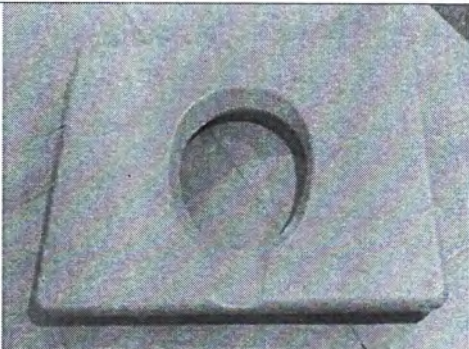
Принадлежности:

Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
-----------------	--	---

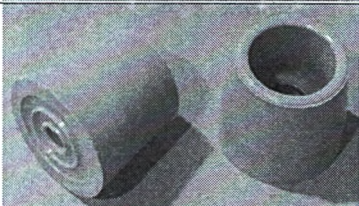
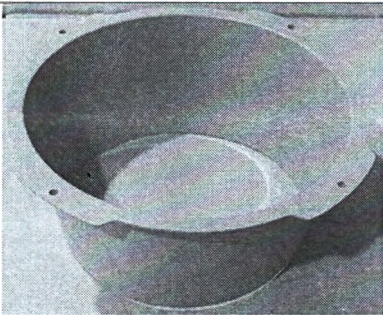
Кресло-туалет медицинский Barгу, вариант исполнения Barгу WC802 в составе:

Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
--------------	---	---

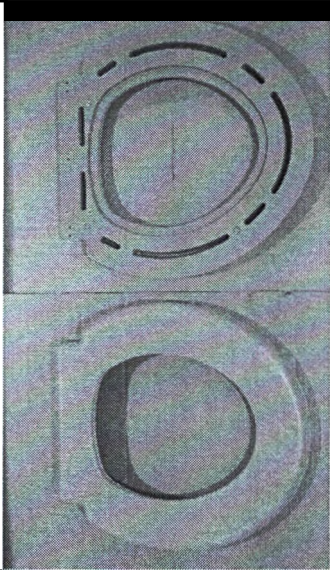
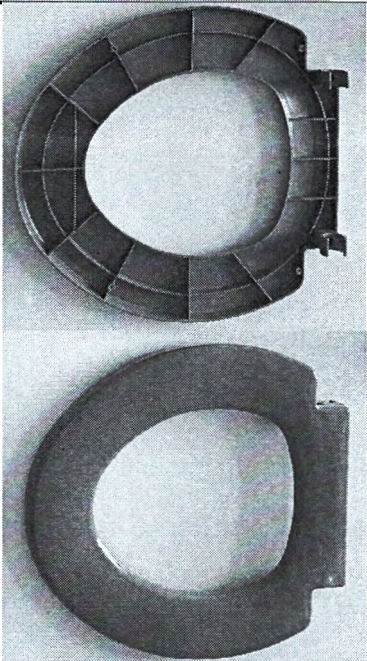
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Ножка выдвижная		Конструкционный элемент. Предназначен для регулировки высоты кресло-туалета
Спинка		Конструкционный элемент, предназначен для увеличения безопасности пациента, находящегося на Кресле- туалете, предотвращая возможность падения назад. и удобства эксплуатации
Сиденье WC802		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро с крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

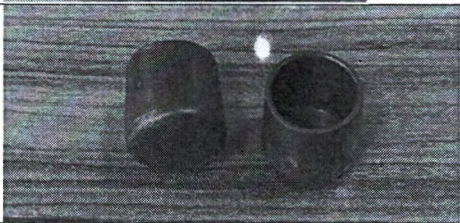
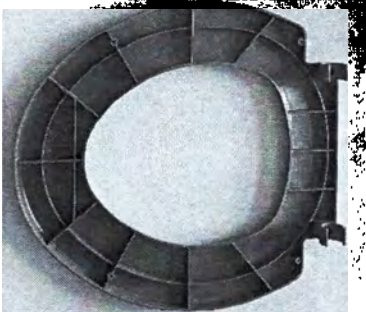
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

		
Резиновая насадка		Используется для предотвращения скольжения конструкции
Принадлежности:		
Защита от брызг		Используется для предотвращения загрязнения в процессе эксплуатации
Кресло-туалет медицинский Barry, вариант исполнения Barry WC600w в составе:		
Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Сиденье WC600		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Сиденье WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.
Ведро с крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

		
Пластиковая насадка WC600		Используется для предотвращения скольжения конструкции
Кресло-туалет медицинский Ваггу, вариант исполнения Ваггу WC610 в составе:		
Рама туалета		Конструкционный элемент. Предназначен для удобства использования и поддержки пациента
Сиденье WC		Предназначено для комфортного и безопасного расположения пациента на Кресле-туалете.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

		
Ведро с крышкой		Ведро, цвет голубой или серый. Предназначено для сбора и выноса испражнений.
Пластиковая насадка WC610		Используется для предотвращения скольжения конструкции

1.10 Маркировка

Маркировка кресел-туалетов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 57766-2017, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 и технической документации производителя.

На кресло-туалете Вагу должна быть маркировка, включающая:
- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

- наименование и вариант исполнения изделия;
- максимальная масса пользователя;
- обратитесь к инструкции по эксплуатации;
- идентификационный (серийный/заводской) номер;
- месяц и год изготовления изделия;
- номер регистрационного удостоверения.

На транспортной упаковке каждого кресла-туалета Barry и принадлежностей должен быть наклеен бумажный ярлык, содержащий:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и вариант исполнения изделия;
- идентификационный (серийный/заводской) номер;
- габаритные размеры упаковки;
- вес нетто/брутто;
- условия хранения и транспортирования;
- знак особая утилизация;
- месяц и год изготовления изделия;
- информация о производителе;
- информация об уполномоченном представителе производителя;
- количество штук в упаковке;
- номер регистрационного удостоверения;
- манипуляционные знаки.

Поставка кресло-туалета осуществляется в разобранном состоянии, его сборка осуществляется клиентом при получении. Сборка может выполняться одним лицом. Инструкция по сборке кресла-туалета представлена в пункте 2.

Серийный номер, присваиваемый медицинскому изделию, имеет следующую структуру:

SN: XXX0820220001

XXX – Каталожный номер модификации.

082022 – Дата производства.

0001 – Порядковый номер в серии.

Каталожный номер	Наименование модели
114	Barry WC100
115	Barry WC101
116	Barry WC200
117	Barry WC201
118	Barry WC302
119	Barry WC313
120	Barry WC500
121	Barry WC510
122	Barry WC511
123	Barry WC600
124	Barry WC700
125	Barry WC802
213	Barry WC600w
215	Barry WC610

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Маркировка принадлежностей:

LOT: XXXX082022001

XXXX – Каталожный номер.

082022 – Дата производства.

001 – Порядковый номер в серии.

Каталожный номер	Наименование модели
1101	Ведро с крышкой
1102	Резиновая насадка
1103	Резиновая насадка WC500
1104	Защита от брызг
1105	Сиденье с крышкой
1106	Сиденье WC600
1107	Сиденье WC700
1108	Сиденье WC802
1109	Колесо самоориентирующееся
1110	Колесо самоориентирующееся с тормозом
1111	Пластиковая насадка WC600
1112	Сиденье с крышкой WC300
1113	Колесо самоориентирующееся WC201
1114	Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B
1115	Резиновая насадка WC700
1116	Ведро с крышкой WC700
1117	Сиденье с крышкой WC
1118	Сиденье WC
1119	Колесо самоориентирующееся U
1120	Колесо самоориентирующееся с тормозом UB

1.10.1 Макет маркировки на медицинском изделии

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC100:

		Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:		Barry WC100	
Макс. масса пользователя: 100 кг.			
	114XXXXXXXXXX	 2 0009886884700	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.	
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC101:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC101	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	115XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC200:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC200	
Макс. масса пользователя: 180 кг.		
	116XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC201:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC201	
Макс. масса пользователя: 180 кг.		
	117XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC302:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC302	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	118XXXXXXXXXX	 2 000000 12345678
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC313:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC313	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	119XXXXXXXXXX	 2 000000 12345678
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC500:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC500	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	120XXXXXXXXXX	 2 000000 12345678
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC510:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC510	
Макс. масса пользователя: 115 кг.		
	121XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC511:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC511	
Макс. масса пользователя: 115 кг.		
	122XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC600:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC600	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	123XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC700:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC700	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	124XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC802:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	Barry WC802	
Макс. масса пользователя: 200 кг.		
	125XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Макет маркировки варианта исполнения Barry WC600w:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:	WC600w	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	213XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	ПУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

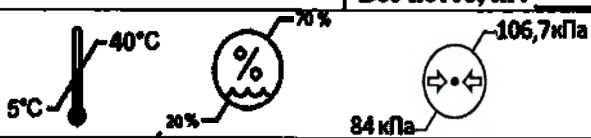
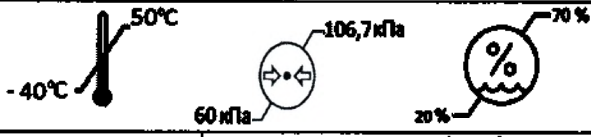
Макет маркировки варианта исполнения Barry WC610:

	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения	WC610	
Макс. масса пользователя: 100 кг.		
	215XXXXXXXXXX	
	XX/XXXX	РУ № P3H 2022/17071 от 20.12.2022 г.
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	

Информация	Символ
Товарный знак	
Наименование изделия:	Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями
Серийный номер	
Обратитесь к инструкции по эксплуатации	
Дата изготовления	
Информация о производителе	
Наименование производителя (ООО «АРИДЕС»)	ARIDES LLC
Адрес производителя (улица Раффи, 111, Малатия-Себастья, 0064 Ереван, Республика Армения)	1. 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

1.10.2 Макет маркировки на упаковку

		Кресло-туалет медицинский Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения	Barry WCXXXx	Размер (ДхШхВ), мм:	
	XXXXXXXXXXXXX	_____ Вес брутто, кг: _____ Вес нетто, кг: _____	
Условия хранения			
Условия транспортировки			
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC, 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		
 СИМС-2	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru		
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17071 от 20.12.2022 г.		 2100098846664701 Количество в упаковке <u> N </u> штук	
			

На транспортную упаковку следует вынести крупно дополнительно следующие информационные манипуляционные знаки:

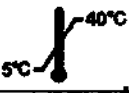
Информационный знак	Описание	Обозначение
	Беречь от влаги	Медицинское изделие необходимо защищать от влаги
	Хрупкое. Осторожно	Медицинское изделие может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно
	Верх, расположение	Правильное вертикальное положение груза

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

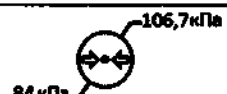
1.10.3 Маркировка составных частей и принадлежностей медицинского изделия

Маркировка принадлежностей или составных частей кресло-туалетов наносится в виде маркировочной таблицы на корпус изделия размером 70×50мм* (*Примечание: Производитель оставляет за собой право изменить указанные размеры). В случае, если нет возможности нанесения маркировки на корпус изделия, маркировочная наносится на упаковку изделия или вкладывается в упаковку вместе с изделием.

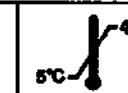
Макет маркировки Ведро с крышкой

	Ведро с крышкой для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вместимый объем:	7 литров		
Условия эксплуатации:	   		
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Резиновая насадка

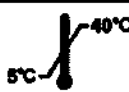
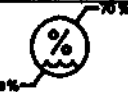
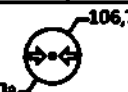
		Резиновая насадка для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:		Barry WC100, Barry WC200, Barry WC302, Barry WC313, Barry WC510, Barry WC802	
	XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук	
Условия эксплуатации:			
		ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	
			

Макет маркировки Резиновая насадка для Barry WC500

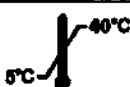
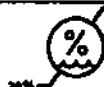
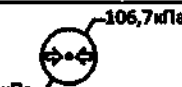
		Резиновая насадка WC500 для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями	
Вариант исполнения:		Barry WC500	
	XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук	
Условия эксплуатации:		   	
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

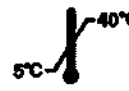
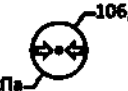
Макет маркировки Защита от брызг

	Защита от брызг для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC100, Barry WC101, Barry WC200, Barry WC201, Barry WC302, Barry WC313, Barry WC500, Barry WC510, Barry WC511, Barry WC700, Barry WC802		
Условия эксплуатации:	  		
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Сиденье с крышкой

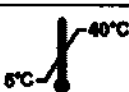
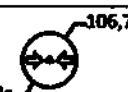
	Сиденье с крышкой для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC100, Barry WC101, Barry WC200, Barry WC201, Barry WC500, Barry WC510, Barry WC511		
Условия эксплуатации:	  		
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Сиденье WC600

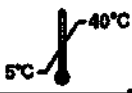
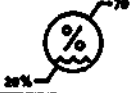
	Сиденье для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC600		
Условия эксплуатации:	  		
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

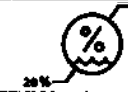
Макет маркировки Сиденье WC700

	Сиденье для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC700		
Условия эксплуатации:	  		
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Сиденье WC802

	Сиденье с крышкой для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC802		
Условия эксплуатации:	  		
	XX/XXXX		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Колесо самоориентирующееся

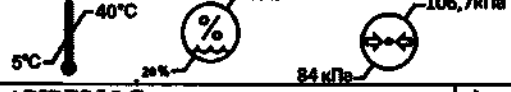
	Колесо самоориентирующееся для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511		
	XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук	
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки Колесо самоориентирующееся с тормозом

	Колесо самоориентирующееся с тормозом для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:			
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Пластиковая насадка WC600

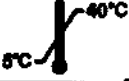
	Пластиковая насадка для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC600		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:			
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Сиденье с крышкой WC300

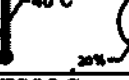
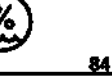
	Сиденье с крышкой для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC300, Barry WC302, Barry WC313		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:			
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки Колесо самоориентирующееся WC201

	Колесо самоориентирующееся WC201 для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B

	Колесо самоориентирующееся с тормозом WC201B для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Резиновая насадка WC700

	Резиновая насадка WC700 для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC700		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки Ведро с крышкой WC700

	Ведро с крышкой WC700 для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC700		
Вместаемый объем:	7 литров		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Сиденье с крышкой WC

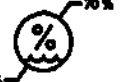
	Сиденье с крышкой WC для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC100, Barry WC101, Barry WC200, Barry WC201, Barry WC302, Barry WC313, Barry WC500, Barry WC510, Barry WC511, Barry WC700, Barry WC802		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Сиденье WC

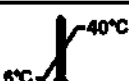
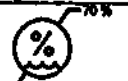
	Сиденье WC для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC600, Barry WC600w, Barry WC610		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

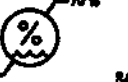
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Макет маркировки Колесо самоориентирующееся U

	Колесо самоориентирующееся U для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Макет маркировки Колесо самоориентирующееся с тормозом UB

	Колесо самоориентирующееся с тормозом UB для Кресло-туалета медицинского Barry с принадлежностями		
Вариант исполнения:	Barry WC101, Barry WC201, Barry WC511		
 XX/XXXX	Количество в упаковке <u>N</u> штук		
Условия эксплуатации:	  		
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		

Информация	Символ
Торговое обозначение предприятия-изготовителя	
Наименование изделия:	Кресло-туалет медицинский Barry
Дата изготовления	
Условия эксплуатации	  
Особая утилизация	
Информация о производителе	
Наименование производителя (ООО «АРИДЕС»)	ARIDES LLC

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Адрес производителя (улица Раффи, 111, Малатия-Себастья, 0064 Ереван, Республика Армения)	111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia
Дополнительные символы, которые может нанести предприятие - изготовитель при необходимости и по требованию заказчика	
Знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза	Eurasian Conformity Mark

1.11 Упаковка

Упаковка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и технической документацией Производителя.

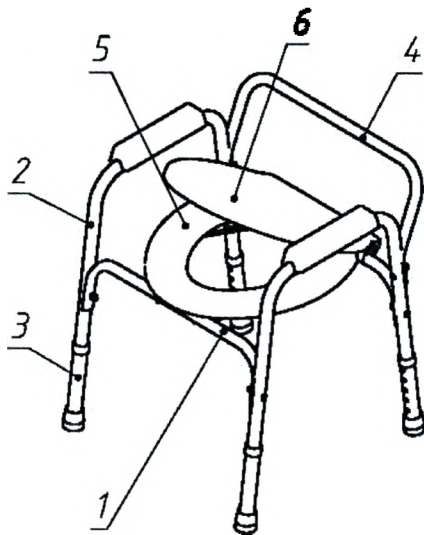
Кресло-туалеты медицинский Вагу с принадлежностями в разобранном виде помещаются в прозрачную полиэтиленовую пленку ПНД(LDPE) марки «ЛПК», плотностью 925 кг/м³, толщиной 0,1 мм, производства ООО «Ленинградский Полиграфический Комбинат» (Россия) или аналогичную, а затем в гофрокороб из пятислойного гофрированного картона марок П35, П37 (в соответствии с ГОСТ Р 52901) толщиной 6 мм, плотностью 150 г/м³, цвет бурый, габаритные размеры не более 100×100×100 см, производства ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» (Россия) или аналогичного.

Составные части и принадлежности поставляемые отдельно должны быть отдельно (единично) упакованы, помещаются в прозрачную полиэтиленовую пленку ПНД(LDPE) марки «ЛПК», плотностью 925 кг/м³, толщиной 0,1 мм, производства ООО «Ленинградский Полиграфический Комбинат» (Россия) или аналогичную, а затем в гофрокороб из пятислойного гофрированного картона марок П35, П37 (в соответствии с ГОСТ Р 52901) толщиной 6 мм, плотностью 150 г/м³, цвет бурый, габаритные размеры не более 100×100×100 см, производства ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» (Россия) или аналогичного. В случае, если транспортная (потребительская) упаковка (тара) содержит несколько составных частей и принадлежностей, то на упаковку наносится маркировка для каждой составной части и принадлежности. Если количество грузовых мест более одного, то указывается количество грузовых мест N и номер упаковки.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

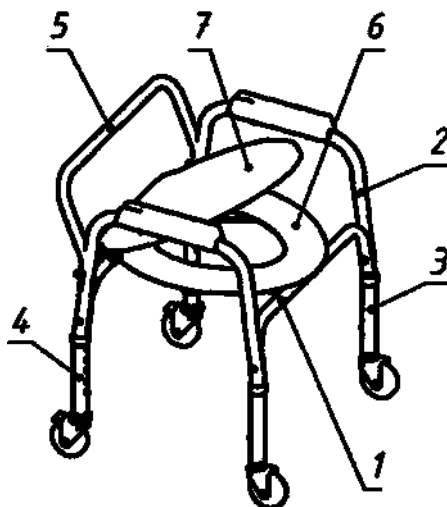
2. Сборка кресла-туалета

2.1 Сборка кресла-туалета WC100.



Поставляется в частично собранном виде. Выдвижные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; при помощи 4 винтов М6×35 с шайбами и гайками крепить поручни п.2 к раме п.1, затем крепить спинку п.4 в двух местах тем же крепежом. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.5,6.

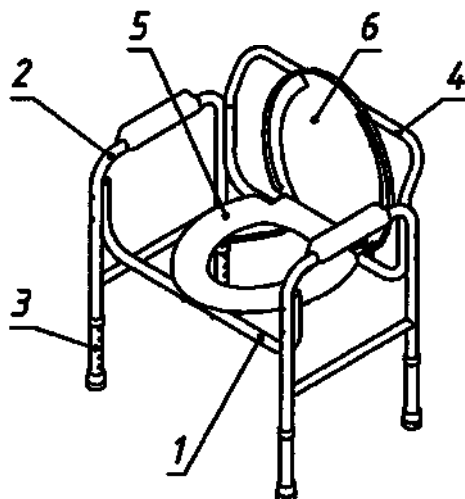
2.2 Сборка кресла-туалета WC101.



Поставляется в частично собранном виде. Выдвижные колесные ножки п.3,4 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; при помощи 4 винтов М6×35 с шайбами и гайками крепить поручни п.2 к раме п.1, затем крепить спинку п.5 в двух местах тем же крепежом. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.6,7.

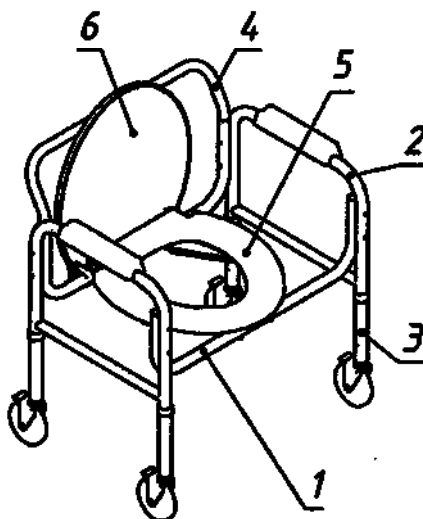
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

2.3 Сборка кресло-туалета WC200.



Поставляется в частично собранном виде. Выдвижные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; к раме п.1 при помощи 8 винтов М6×50 с шайбами и гайками в четырех местах крепить поручни п.2, затем вставить спинку п.4 в ответные части в раме. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.5,6.

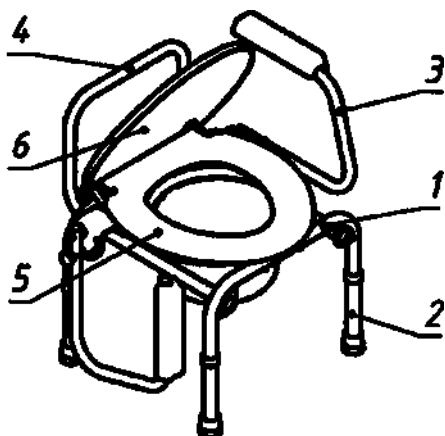
2.4 Сборка кресло-туалета WC201.



Поставляется в частично собранном виде. Выдвижные колесные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; к раме п.1 при помощи 8 винтов М6×50 с шайбами и гайками в четырех местах крепить поручни п.2, затем вставить спинку п.4 в ответные части в раме. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.5,6.

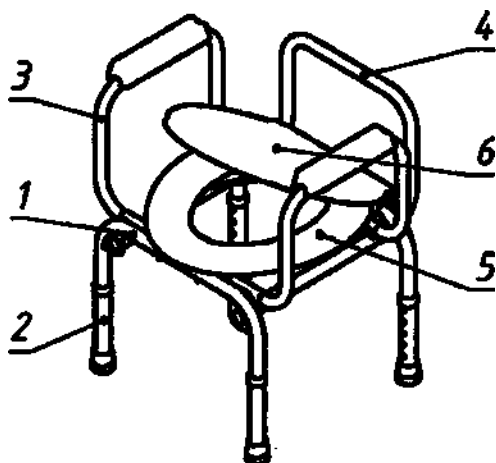
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

2.5 Сборка кресло-туалета WC302



Поставляется в частично собранном виде. Выдвижные ножки п.2 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; в ответные части рамы сзади установить спинку п.4 так, чтобы пружинные фиксаторы совпали с отверстиями; при необходимости поручни п.3 привести в вертикальное положение. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.5,6.

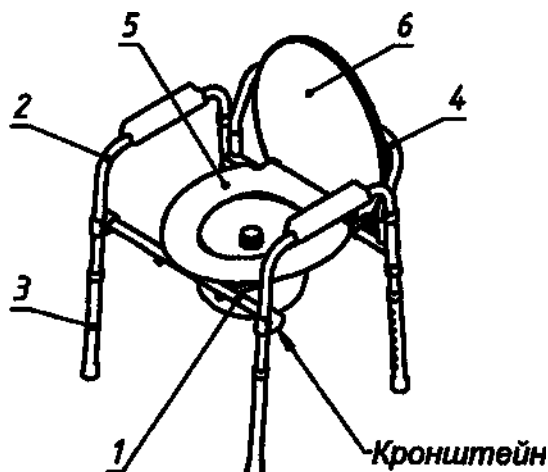
2.6 Сборка кресло-туалета WC313.



Поставляется в частично собранном виде. Выдвижные ножки п.2 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; в ответные части рамы по бокам установить поручни п.3 и сзади спинку п.4 так, чтобы пружинные фиксаторы совпали с отверстиями. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.5,6.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

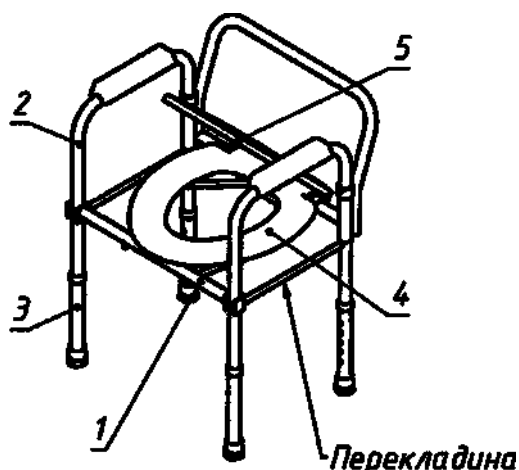
2.7 Сборка кресло-туалета WC500



Поставляется в сложенном, частично собранном виде.

Раздвинуть поручни п.2, поднять держатель п.1 и зафиксировать его на кронштейнах; выдвижные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; в ответные части рамы сзади установить спинку п.4 так, чтобы пружинные фиксаторы совпали с отверстиями. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.5,6.

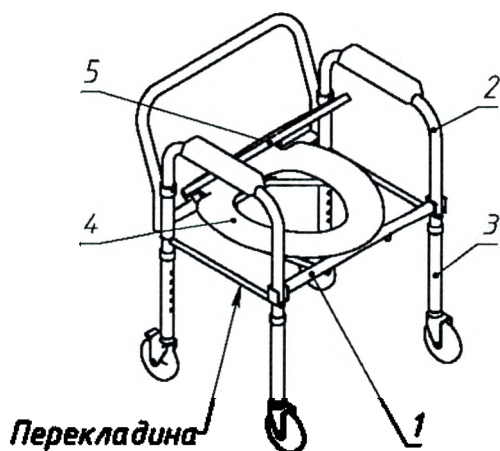
2.8 Сборка кресло-туалета WC510



Поставляется в сложенном, полностью собранном виде.

Раздвинуть поручни п.2, поднять держатель п.1 и совместить скобы на держателе с поручнями, затем опустить держатель на перекладины; выдвижные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.4,5.

2.9 Сборка кресло-туалета WC511



Поставляется в сложенном, полностью собранном виде.

Раздвинуть поручни п.2, поднять держатель п.1 и совместить скобы на держателе с поручнями, затем опустить держатель на перекладины; выдвижные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами. На раму установить пластиковое сиденье с крышкой п.4,5.

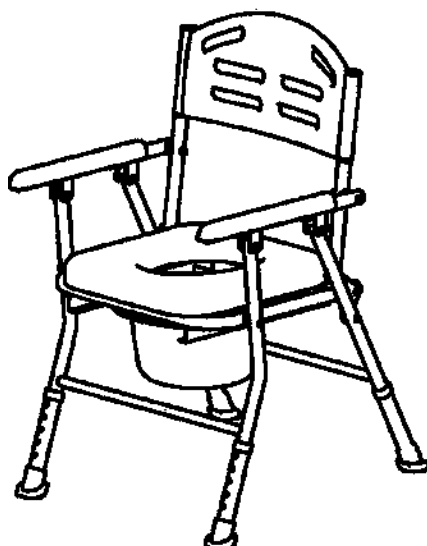
ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

2.11 Сборка кресло-туалета WC600



Поставляется полностью собранным в сложенном виде. Для начала использования изделие разложить и опустить фиксаторы, расположенные сзади; поднять сиденье и вложить ведро без крышки на держатели.

2.12 Сборка кресло-туалета WC700

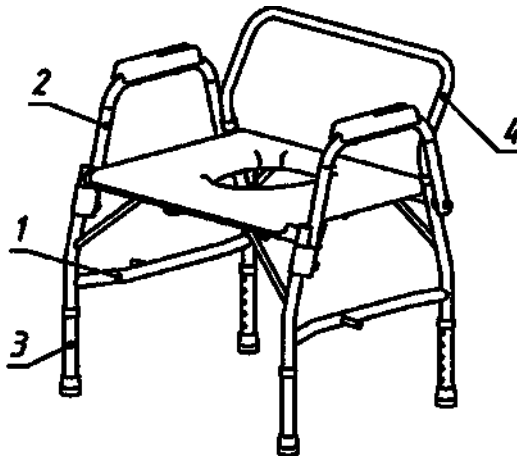


Поставляется полностью собранным в сложенном виде. Для начала использования изделие разложить, ведро без крышки вставить спереди на держатели.

2.13 Сборка кресло-туалета WC802

На раму п.1 устанавливают 4 выдвижные ножки п.3 и крепят сиденье на клипсах, затем к двум шпилькам М8 по бокам рамы через пластиковые проставки крепят поручни п.2 шайбами и гайками, в ответные части рамы сзади вставляют спинку п.4.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

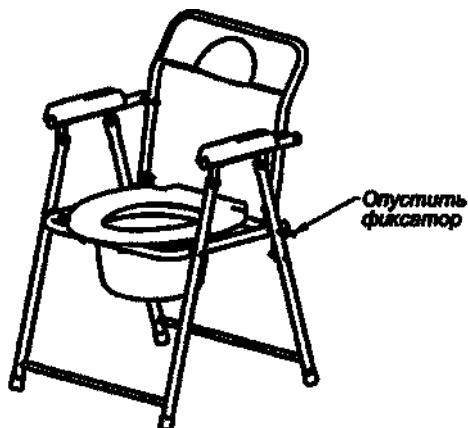


Поставляется в сложенном, частично собранном виде.

Для начала использования изделие разложить, ведро без крышки вставить спереди на держатели.

Выдвижные ножки п.3 совместить отверстиями с кнопочными фиксаторами; в ответные части рамы сзади установить спинку п.4 так, чтобы пружинные фиксаторы совпали с отверстиями; при необходимости поручни п.2 привести в вертикальное положение. Ведро без крышки вставить спереди на держатели.

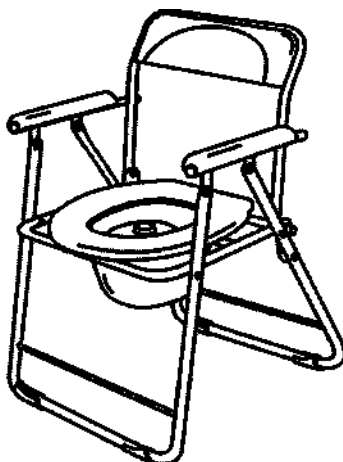
2.13 Сборка кресло-туалета WC600w



Поставляется полностью собранным в сложенном виде. Для начала использования изделие разложить и опустить фиксаторы, расположенные сзади; поднять сиденье и вложить ведро без крышки на держатели.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

2.14 Сборка Кресло-туалета WC610



Поставляется полностью собранным в сложенном виде. Для начала использования изделие разложить и опустить фиксаторы, расположенные сзади; поднять сиденье и вложить ведро без крышки на держатели.

3. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Техническое обслуживание и ремонт медицинского изделия, включая гарантийный ремонт, производится на территории Российской Федерации уполномоченным дистрибьютором производителя - ООО «СИМС-2» по адресу: 125430, г. Москва, улица Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18.

тел: (495) 792-31-90 (многоканальный), e-mail: info@sims2.ru.

Техническое обслуживание медицинского изделия включает в себя:

Осмотр перед каждым использованием медицинского изделия на наличие внешних повреждений. В процессе эксплуатации следите, чтобы все детали рамы, поручни, подлокотники были хорошо закреплены, резиновые насадки не были порваны. Замените насадки в случае необходимости. При обнаружении повреждений обратитесь в специализированный сервис-центр.

Для обеспечения безопасной эксплуатации Вашего медицинского изделия, его нужно осматривать перед каждым повторным применением и каждые 24 месяца необходимо проверять в специализированном сервис-центре.

Необходимый ремонт должен проводиться только квалифицированным специалистом.

4. Транспортировка

Условие транспортирования:

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями:

Температура воздуха от -40°C до +50°C

Относительная влажность от 20% до 70% (неконденсирующаяся)

Атмосферное давление от 60 кПа до 106,7 кПа.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

5. Условия и срок хранения

Хранить изделие в упаковке изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре.

Температура воздуха от 5°C до +40°C

Относительная влажность от 20% до 70% (неконденсирующаяся)

Атмосферное давление от 60 кПа до 106,7 кПа.

6. Стерильность

Кресло-туалет медицинский Baggy с принадлежностями не являются стерильными и не подлежат обязательной последующей стерилизации.

7. Дезинфекция

Проводите дезинфекцию после каждого пациента/использования, а также в соответствии с графиком дезинфекции, принятом в вашем учреждении и нормативными и методическими указаниями и рекомендациями, действующими в стране, где изделие эксплуатируется.

После использования изделия необходимо снять съемное ведро, очистить от испражнений, промыть и продезинфицировать. Далее очистить и продезинфицировать все поверхности медицинского изделия.

На территории Российской Федерации дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

Дезинфекцию рекомендуется проводить способом двукратного протирания наружных поверхностей комплектовочных салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем средстве Велтосепт (производства «Велт», Россия). После окончания дезинфекции сотрите все остатки дезинфицирующего средства мягкой тканью, смоченной в чистой воде, затем сотрите остатки воды сухой чистой тканью.

Чтобы максимально продлить срок службы медицинского изделия следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуется протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.

Обращение с дезинфицирующими веществами:

- Необходимо в точности соблюдать дозировку. Рекомендуются автоматические дозаторы.
- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.
- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.
- После завершения дезинфекции проветрить помещение.

8. Утилизация и порядок осуществления уничтожения

При необходимости вывода из эксплуатации медицинского изделия или при выявленной неисправности, исключающей возможность ремонта, пользователь должен утилизировать выведенное из эксплуатации изделие, передав его в пункт сбора для переработки согласно СанПин 2.1.3684-21.

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

На территории Российской Федерации медицинское изделие и его принадлежности должны быть утилизированы в соответствии СанПин 2.1.3684-21, класс отходов А - эпидемиологически безопасные отходы, по составу относящиеся к твердым бытовым отходам.

9. Перечень нормативной документации

ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования».

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».

ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования».

ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору».

ГОСТ ISO 14971-2021 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям».

10. Гарантийные обязательства

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя гарантирует, что приобретенное Вами медицинское изделие не имеет производственных

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации медицинского изделия – 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения медицинского изделия – 3 месяца.

Медицинское изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием серийного (заводского) номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

В период гарантийного срока при обнаружении заводских дефектов пользователь может обратиться к уполномоченному дистрибьютору производителя в Российской Федерации - ООО «СИМС-2» по адресу: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18, тел: (495) 792-31-90 (многоканальный), e-mail: info@sims2.ru.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-туалет медицинский Вагу с принадлежностями:

_____ (наименование варианта исполнения изделия, серийный номер)

дата выпуска _____

соответствуют технической документации и признана годной к эксплуатации.

_____ подпись лица, ответственного за приемку

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кресло-туалет медицинский Вагу с принадлежностями

_____ (наименование варианта исполнения изделия, серийный номер)

Приобретен _____

_____ (дата, подпись, штамп торгующей организации)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»

111, ул. Раффи, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения

тел.: + 37460 52 99 50

info@arides.am

11. Контактная информация

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия	№1.00.6
		Дата изменения	03.07.2024

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации по вопросам качества:

Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»), Адрес: 125430, Россия, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, помещение 1012Б, ком. С 15 по 18, Тел.: +7 (495)-792-31-90, E-mail: info@sims2.ru, Сайт: sims2.ru

Армения:

ARIDES Limited liability company (Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»)

ARIDES LLC (ООО «АРИДЕС»)

111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

(111, ул. Раффи, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения)

Тел.: +37460 52 99 50

Факс: +37460 52 99 50

Адрес электронной почты: info@arides.am

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
всего 2 листов

