

Фотографические изображения медицинского изделия:

● «Вибромассажеры медицинские CS Medica VibraPulsar: CS-v1, CS-v2»

Вибромассажеры медицинские CS Medica VibraPulsar: CS-v1, CS-v2

Вибромассажер медицинский CS Medica VibraPulsar CS-v1 в составе:



1. Вибромассажер



2. 4 сменные массажные насадки (гладкая насадка, точечная насадка, мягкая насадка (акупрессура), широкая насадка с 4-мя головками)







мягкая насадка (акупрессура)



широкая насадка с 4-мя головками



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
с гарантийным талоном**

**ВИБРОМАССАЖЕР
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica
VibraPulsar CS-v1**

**с электронным управлением
и 4 видами сменных массажных насадок**



EAC

**Благодарим Вас за приобретение
вибромассажера медицинского CS Medica VibraPulsar CS-v1!**



Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

*** ПРИБОР ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ***



Вибромассажер медицинский CS Medica VibraPulsar. Модель: CS-v1

MEDICA AC 220 V 50Hz; 28W



Wenzhou Pangao Fitness Equipments Co., Ltd.

Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park, Wanquan Town,
Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China



15 мин/15 мин

Сделано
в Китае



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Арт.: CS Medica VibraPulsar CS-v1

Лот No. : 86b (121b-2)

Количество: 12 Шт.

Размеры короба: 46 X 43 X 47 см.

Брутто: 14.5 Кг.

Нетто: 13.5 Кг.

Венчжоу Пангао Фитнес Эквипментс Ко., Лтд.

Провинция Чжэцзян, г. Венчжоу, Пинъян, Ваньцюань,

Промышленный парк Гуанда, здание 3, этаж 5, Китай

Сделано в Китае





ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v1

Предназначен для проведения интенсивного вибрационного массажа различных частей тела человека, оказывая воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы постукивания и поглаживания.

Используя вибромассажер медицинский CS Medica VibraPulsar CS-v1, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры в домашних условиях. Благодаря чему достигается устойчивый терапевтический эффект.



Улучшение кровообращения,
устранение застойных
явлений



Снижение напряженности
в мышцах и чувства
усталости



Воздействие на хронические
отложения в проблемных
местах



Улучшение состояния
при хронической усталости,
депрессии и стрессе

В комплекте:



Вибромассажер



4 сменные

массажные насадки:
и ладонь, насадка "пальцы", насадка в
мягкой насадке (для упрессуры),
щипковая насадка с 4-мя пальцами



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным талоном

ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ

Импортером и уполномоченным представителем изготовителя на территории Российской Федерации и таежко государств-членов Таможенного союза является фирма ООО «Сизс Медика».

ООО «Сизс Медика»
127006, Москва, Воронцовский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Тел./факс: +7 (495) 383-16-52, +7 (495) 383-16-56
E-mail: sales@csmedica.ru
www.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия в России: 8-800-555-00-80



CS Medica

VibraPulsar



1. Вибромассажер



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
с гарантийным талоном**

**ВИБРОМАССАЖЕР
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica
VibraPulsar CS-v2**

**с функцией интенсивного прогрева
(дополнительная тепловая стимуляция)**



EAC

**Благодарим Вас за приобретение
вибромассажера медицинского CS Medica VibraPulsar CS-v2!**



Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

*** ПРИБОР ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ***

CS

MEDICA

Вибромассажер медицинский CS Medica VibraPulsar. Модель: CS-v2

AC 220 V 50Hz; 28W



Wenzhou Pangao Fitness Equipments Co., Ltd.

Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park, Wanquan Town,
Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China



Сделано
в Китае



15 мин/15 мин



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Арт.: CS Medica VibraPulsar CS-v2

Лот No. : 86b (121b-2)

Количество: 9 Шт.

Размеры короба: 52.5 X 48 X 53 см.

Брутто: 13.6 Кг.

Нетто: 12.6 Кг.


Венчжоу Пангао Фитнес Эквипментс Ко., Лтд.
Провинция Чжэцзян, г. Венчжоу, Пинъян, Ваньцюань,
Промышленный парк Гуанда, здание 3, этаж 5, Китай
Сделано в Китае





ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

CS Medica VibraPulsar CS-v2

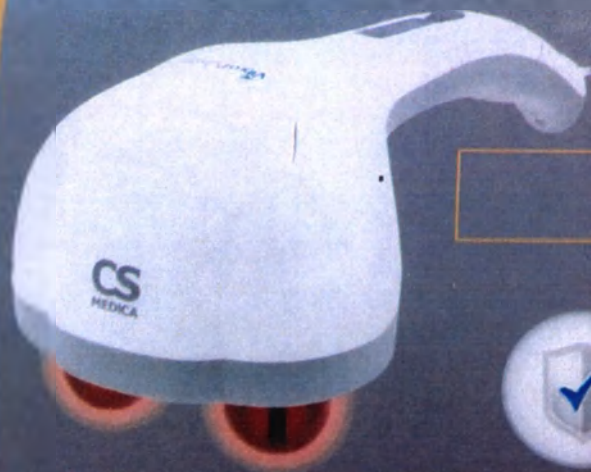

Безопасность использования

Прибор имеет защиту от пробоя тока и от перегрева. При этом прибор имеет высокую надежность и долговечность. Вибрация прибора выполнена на качественном и безопасном уровне.



Эффективный

Высокая интенсивность вибрации для массажных головок (от 2000 уд/мин до 2800 уд/мин) с функцией таймера. Регулируемая интенсивность вибрации позволяет проводить массаж с эффективными воздействиями на каждый проблемный участок тела.



Эргономичный

Основная часть прибора имеет форму, удобную для использования. Низкий вес самого прибора позволяет использовать его на труднодоступных участках тела без дополнительной нагрузки.



Функция интенсивного прогрева

Дополнительная тепловая стимуляция усиливает эффект действия массажа. Глубоко прогревая ткани и мышцы, позволяет добиться еще большего эффекта от применения массажа.



Удобство самостоятельного проведения массажа

Удобная форма рукоятки и уникальная конструкция корпуса "Self Lock" делают прибор удобным для самостоятельного проведения массажа. Корпус прибора имеет фиксатор, который позволяет зафиксировать прибор в нужном положении, что позволяет использовать его на любом участке тела.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СИЭС МЕДИКА

Исаков А. Б.

ПРОШУРОВАН

20 ЛИСТОВ



Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие

«Вибромассажеры медицинские CS Medica VibraPulsar: CS-v1, CS-v2»



Вибромассажер медицинский
CS Medica VibraPulsar. Модель: CS-v1

MEDICA AC 220 V 50Hz; 28W



Wenzhou Pangao Fitness Equipments Co., Ltd.

Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park, Wanquan Town,
Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China



Сделано
в Китае



15 мин/15 мин



Вибромассажер медицинский
CS Medica VibraPulsar. Модель: CS-v2

MEDICA AC 220 V 50Hz; 28W



Wenzhou Pangao Fitness Equipments Co., Ltd.

Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park, Wanquan Town,
Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China



Сделано
в Китае



15 мин/15 мин



MEDICAL MASSAGER Art.: CS Medica VibraPulsar CS-v1 Lot No. Quantity in CTN : 12 Pcs. CTN. Meas.: 46 X 43 X 47 cm. GW: 14,5 Kg. NW: 13,5 Kg. Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China Made In China	EAC FRAGILE Handle with care  CTN No: /398	ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ Арт.: CS Medica VibraPulsar CS-v1 Лот No. Количество: 12 шт. Размеры короба: 46 X 43 X 47 см. Брутто: 14,5 Кг. Нетто: 13,5 Кг. Провинция Чжэцзян, г. Вэнчжоу, Пинъян, Ваньцюань, Промышленный парк Гуанда, здание 3, этаж 5 Сделано в Китае	EAC Осторожно! Хрупкое!  короб №: /398
---	---	---	---

MEDICAL MASSAGER

Art.: CS Medica VibraPulsar CS-v2
Lot No.
Quantity in CTN : 9 Pcs.
CTN. Meas.: 52,5 X 48 X 53 cm.
GW: 13,6 Kg.
NW: 12,6 Kg.

Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park,
Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City,
Zhejiang Province, China

Made in China

**FRAGILE**

Handle with care



CTN No: /300

ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Арт.: CS Medica VibraPulsar CS-v2
Лот No.
Количество: 9 Шт.
Размеры короба: 52,5 X 48 X 53 см.
Брутто: 13,6 Кг.
Нетто: 12,6 Кг.

Провинция Чжэцзян, г. Венчжоу, Пинъян,
Ваньюань, Промышленный парк Гуанда,
здание 3, этаж 5
Сделано в Китае



Осторожно!
Хрупкое!



короб №: /300

Маркировка транспортной упаковки вибромассажера медицинского CS Medica VibraPulsar CS-v2



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v1



Легкий и компактный
Небольшой вес и элегантный дизайн прибора обеспечивают максимальное удобство использования.



Функциональный и эффективный
Благодаря наличию электронной кнопки управления, высокой интенсивности вибрации (от 2000 уд/мин до 3000 уд/мин) с возможностью регулировки, а также наличию 4-х различных автоматических режимов массажа – обеспечивается эффективное проведение массажа каждого проблемного участка тела.



4 сменные массажные насадки
В комплекте 4 вида сменных насадок для проведения различных видов массажа.



Удобство самостоятельного проведения массажа
Удлиненная форма рукоятки прибора и мягкая поверхность корпуса "Soft Look", предотвращающая нежелательное скольжение прибора в руке, позволяют комфортно проводить массаж всего тела под любым углом без помощи других лиц.



Безопасность использования
Прибор соответствует требованиям стандартов по электромагнитной совместимости и электробезопасности. Корпус прибора выполнен из качественного безопасного пластика. Автоматическое выключение через 15 минут.

VibraPulsar



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v1



VibraPulsar



Выбираем
здоровье



**ЭФФЕКТИВНЫЕ
МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
(4 ПРОГРАММЫ ВИБРАЦИОННОГО
МАССАЖА)**



**ЛЕГКИЙ
И КОМПАКТНЫЙ**



**4 СМЕННЫЕ
МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ**



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v1

VibraPulsar



Плечевой пояс и задняя
поверхность шеи



Спина, ягодицы



Внутренняя и внешняя
поверхность рук



Внутренняя и внешняя поверхность
бёдер, икроножные мышцы




Ступни



Импортером и уполномоченным представителем на территории Российской Федерации является ООО «Сис-Медика» (ОГРН 1045003000000, ИНН 5003003000, ОГРНИП 1045003000000). Адрес: 127008, Москва, Воронцовский пер., д. 7, стр. 3, комната 9. Контактная информация: E-mail: sales@csmedica.ru, Tel: (495) 363 16 52, 17 (495) 363 16 56. Сайт: www.csmedica.ru. Бюджетная торговая марка в России: 8-800-555-00-80.

Регулятор по эксплуатации с гарантийными талонами

4 сменные массажные насадки, каждая из которых имеет свой уникальный дизайн и форму. В комплекте: 18 месяцев

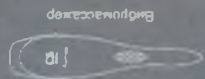

Улучшение состояния при хронической усталости, депрессии и стрессе



Воздействие на жировые отложения в проблемных местах





Снижение напряжения в мышцах и чувствительности



Улучшение кровообращения, устранение застойных явлений

Принадлежит для проведения интенсивного вибрационного массажа. Вибрация осуществляется с помощью электродвигателя, который выдает частоту колебаний от 2000 до 3000 уд/мин. При этом достигается эффект расслабления мышц, снятия напряжения, улучшения кровообращения. Вибрация осуществляется с помощью электродвигателя, который выдает частоту колебаний от 2000 до 3000 уд/мин. При этом достигается эффект расслабления мышц, снятия напряжения, улучшения кровообращения.

18-05-2018

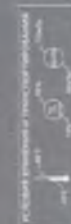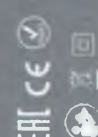

Производитель:
Medica VibraPulsar Equipment Co., Ltd.
(Beijing) Limited, Zhongguo Road, 100000
Floor 3, Building 3, Shuangbei Industrial Park, Jingdong Town,
Jingdong County, Weibei City, Heilongjiang Province, China
(Примечание: Не путать с: Beijing, Peking, Пекин)
Промышленный парк Гуандун, здание 3, этаж 3



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v2

VibraPulsar



Безопасность использования

Прибор соответствует требованиям стандартов по электромагнитной совместимости и электробезопасности. Корпус прибора выполнен из качественного безопасного пластика.



Эффективный

Высокая интенсивность вибрации двух массажных головок (от 2000 уд/мин до 2800 уд/мин) с возможностью плавной регулировки обеспечивают наиболее комфортное проведение массажа с эффективным воздействием на каждый проблемный участок тела.



Функция интенсивного прогрева

Дополнительная тепловая стимуляция усиливает общее действие массажа, глубоко прогревая ткани и мышцы, позволяет добиться еще более выраженного эффекта от применения массажера.



Эргономичный

Основной вес перенесен в головную часть массажера — используя вес самого прибора, происходит массажное воздействие на труднодоступные участки тела без дополнительных усилий.



Удобство самостоятельного проведения массажа

Удлиненная форма рукоятки и мягкая поверхность корпуса "Soft Look", предотвращающая нежелательное скольжение прибора в руке, позволяют комфортно проводить массаж всего тела под любым углом и без помощи других лиц.



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v2

VibraPulsar



ИНТЕНСИВНЫЙ
ПРОГРЕВ

Выбираем
здоровье



ЭФФЕКТИВНЫЕ
МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



ФУНКЦИЯ ИНТЕНСИВНОГО
ПРОГРЕВА



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ИНТЕНСИВНОСТИ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ



VibraPulsar

ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica VibraPulsar CS-v2

Области массажного воздействия



Плечевой пояс
и задняя поверхность шеи



Спина, ягодицы



Внутренняя и внешняя
поверхность рук



Внутренняя и внешняя поверхность
бедер, икроножные мышцы



Стопы



Производитель:

Wenzhou Pangao Fitness Equipments Co., Ltd.
(Венчжоу Пангао Фитнес Эквипментс Ко., Лтд.)
Floor 5, Building 3, Guangda Industrial Park, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
(Провинция Чжэцзян, г. Венчжоу, Пиньян, Ваньцюань, Промышленный парк Гуанда, здание 3, этаж 5)



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica VibraPulsar CS-v2

VibraPulsar

*Выбираем
здоровье*



ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica VibraPulsar CS-v2

Используя вибромассажер медицинский CS Medica VibraPulsar CS-v2, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры в домашних условиях. Помимо общего массажного эффекта, используя функцию интенсивного прогрева, достигается глубокое прогревание

тканей и мышц, что позволяет улучшить состояние человека при различных острых и хронических заболеваниях, болях, а также получить максимальное удовольствие от массажа.



Улучшение кровообращения,
устранение застойных
явлений



Снижение напряжения
в мышцах и чувства
усталости



Воздействие на жировые
отложения в проблемных
местах



Улучшение состояния
при хронической усталости,
депрессии и стрессе

В комплекте:



Вибромассажер



Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном

ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ

Импортером и уполномоченным представителем изготовителя на территории Российской Федерации, а также государств-членов Таможенного союза является фирма ООО «СиЭс Медика»

ООО «СиЭс Медика»
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Тел./факс: +7 (495) 363-16-52, +7 (495) 363-16-56
E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru

Бесплатная горячая линия в России: 8-800-555-00-80

VibraPulsar



VibraPulsar

ВИБРОМАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica VibraPulsar CS-v2



Сделано в Китае

18-05-2018



ПРОШУРОВАННО

7 ЛИСТОВ

