

Nr. 11442

**CERTIFICATION OF COPY**

I the undersigned, **ARIEH KORETZ**,  
Notary at Tel-Aviv , 2 Iben Gavirol street  
hereby certify that the attached document ,  
marked "A" is to the best of my knowledge,

a correct copy of the original document

which is drawn up in the English language  
and has been produced to me.

In witness whereof I hereto set my signature  
and seal,

This 22nd. day of October 2014.

71.- N.I.S fees paid.

NOTARY'S SEAL

חותם הנוטריון

מס' 11442

**אישור העתק**

אני הח"מ **אריה קורץ**, נוטריון בתל-אביב  
רח' אבן גבירול 2, מאשר כי המסמך המצורף,  
והמסומן באות "א" הוא:

העתק מדויק של המסמך המקורי

הערוך בשפה האנגלית שהוצג בפני,

ולראיה הנני מאשר את דיוק העתק הנ"ל  
בחתימת ידי ובחותמי

היום, יום 22 לחודש אוקטובר 2014

שולם שכר בסך - 71 ש"ח.



פנינה ארז  
PNINA EREZ

22-10-2014

בית משפט מחוזי ת"א  
DISTRICT COURT  
OF TEL-AVIV

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. STATE OF ISRAEL

2. This public document

3. Has been signed by

Advocate

3. Acting in capacity of Notary

4. bears the seal/stamp of

the above Notary

**Certified**

5. At the District Court of Tel Aviv Jaffa

6. Date

7. By an official appointed by

Minister of Justice under the

Notaries Law, 1976.

8. Serial number

9. Seal/Stamp

10. Signature



פנינה ארז  
PNINA EREZ

22-10-2014

בית משפט מחוזי ת"א  
DISTRICT COURT  
OF TEL-AVIV

עו"ד אריה קורצט

3. המוכהן בתור נוטריון.

4. נושא את החותם/החותמת

של הנוטריון הנ"ל

**אושר**

5. בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו

6. ביום

7. על ידי מי שמונה בידי שר

המשפטים לפי חוק הנוטריונים,

התשל"ו - 1976

8. מס' סידורי

9. החותם / החותמת

10. חתימה

פנינה ארז  
PNINA EREZ

22-10-2014


בית משפט מחוזי ת"א  
DISTRICT COURT  
OF TEL-AVIV

פנינה ארז  
PNINA EREZ

22-10-2014

בית משפט מחוזי ת"א  
DISTRICT COURT  
OF TEL-AVIV

# bionette

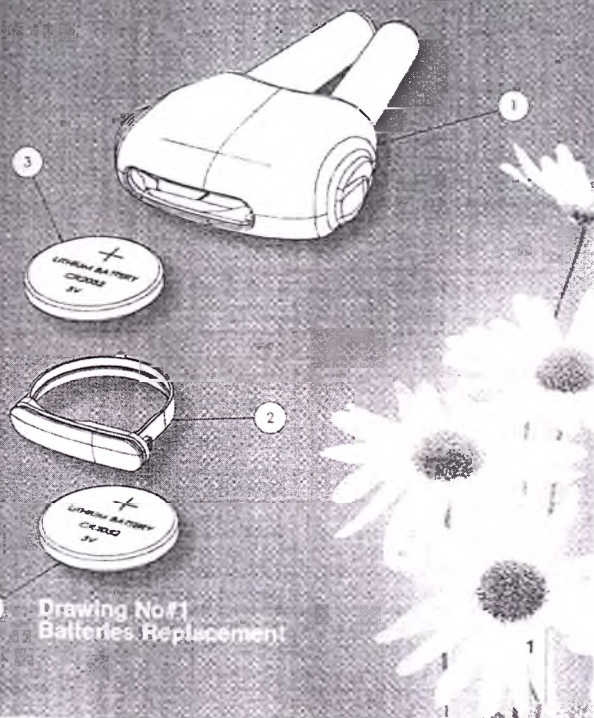

## BioNette™

A revolutionary new device intended for the treatment of allergic rhinitis (hay fever). BioNette™ provides relief and effectively prevents symptoms associated with allergic rhinitis such as: itchy pharynx, itchy eyes, itchy ears, itchy nose, runny nose, tears, sneezing, headaches and watery eyes. The treatment is neither chemical nor pharmacological and has no known side effects. The treatment is based on the photo therapy principle (treatment with light energy). The BioNette™ device utilizes low level narrow band light technology.

## METHOD OF USE

Each treatment session lasts for (approx.) 4.5 minutes. Recommended frequency of use is two to three times a day. In order to attain maximal effectiveness and optimal relief it is recommended that use of BioNette™ begin immediately upon appearance of the first symptoms of rhinitis. Once improvement occurs, the frequency of use can be gradually reduced as required, until it ends completely. BioNette™ is a tiny device that fit into any pocket even the smallest one.

## BEFORE FIRST USE

Please pull out the battery's thin transparent seal strip.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### How to use:

- Depress and hold both rubber buttons on the sides of the device. The two clear prongs will emit a red light.
- Ensure the red light is continuous and not flashing.
- Insert the prongs into the nose whilst pressing both rubber buttons.
- Release the two rubber buttons.
- The treatment is complete when the red light stops automatically, after approximately 4 minutes. (Once activated, it cannot be turned off part way through the treatment cycle).
- Follow the cleaning instructions detailed in the enclosed leaflet.
- Recommended frequency of use is 2-3 times a day. Effectiveness may increase with repeated use.

### Caution:

- Caution: • Parental supervision required for children. • Do not look directly at the light source. • Keep out of the sight and reach of children.

## BATTERIES REPLACEMENT

The BioNette includes 2 high quality lithium CR2032 (3V) batteries. Remove battery cap and load with (2) batteries in correct position as per drawing No#1.

## TECHNICAL DATA

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Light Treatment        | Narrow band 630 nm light                                                |
| Illumination Power     | Minimum 4.0 mW for each nostril                                         |
| Energy dose            | 2 joule                                                                 |
| Timer                  | Push-button Operated automatically turns off after (approx) 4.5 minutes |
| Timer Accuracy         | deviation: 15% +/-                                                      |
| Power Source           | 2X CR2032 (3v)                                                          |
| Current (Max)          | 0.3A                                                                    |
| Battery Lifetime       | Up to 80 treatments                                                     |
| Low Battery Indication | Active LED flashes                                                      |
| Unit Weight            | 18 gram with battery                                                    |
| Unit Size              | 52x38x15 mm                                                             |

## INTERACTIVE EFFECTS

There are no known interactive effects when the device is used in conjunction with pharmacological medications. BioNette™ can be used in conjunction with medications such as antihistamines, which are taken orally, corticosteroids, or medications taken to prevent congestion.

## SIDE EFFECTS

There are no known side effects when using the device. People suffering with severe cases of allergic rhinitis can use BioNette™ more than three times a day without any fear of adverse side effects.

## BACKGROUND ON THE BIOLIGHT SERIES OF PRODUCTS

The BIOLIGHT product line - of which BioNette™ is just one product - is a series of medical devices that utilize low level, narrow band light technology for non - invasive, non - pharmacological treatments.

These products have been developed by a team of scientists and doctors specializing in photo biology and photo-therapy. The products are supported by clinical and scientific data received from a large number of hospitals and clinics, some of which has been published in prestigious medical journals worldwide. These products constitute a significant breakthrough in non-pharmacological treatments. Their effect is impressive and they have no known side effects. Introduction of the **BioNette™** device offers a revolutionary new non-pharmacological alternative for the treatment of allergic rhinitis. Additional BIOLIGHT products include: **BIOSTICK™**, **BIOBEAM™ 660**, **BIOBEAM™ 940**, and **BIOBEAM™ ACNE**. BioNette™ is a registered trademark.

#### CLEANING

- Cleaning: The light source should be cleaned with a mild cleaning solution applied with a soft damp cloth. The **BioNette™** should never be immersed in water.
- Sterilization: Cleaning of the light sources with a cloth soaked in 70% alcohol is recommended.
- Hygienic protection: The most hygienic conditions possible should be maintained.

#### RESOLVING PROBLEMS

| Problem                     | Possible reason                        | Solution/Action                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Red Light does not light up | Batteries are old or empty             | Replace batteries                                                                       |
|                             | Batteries have been incorrectly placed | Replace batteries                                                                       |
|                             | BioNette is faulty                     | If the above solution does not resolve your problem, please contact your local supplier |
| Red Light flashes           | Batteries are weak                     | Replace batteries                                                                       |

#### MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

The warranty is issued to the consumer who purchases the device and ensures that the device is free of defects, both in regard to material and its proper operating condition. The warranty is valid for two years from the date of purchase. The warranty is for repair or free of charge replacement of spare parts which at the discretion of the manufacturer were damaged during normal

operating conditions and when the device was used in accordance with the instructions supplied by the manufacturer.

#### THE WARRANTY WILL NOT APPLY IN THE FOLLOWING INSTANCES:

- Improper use.
- Repair by someone other than the manufacturer or an officially appointed representative of the manufacturer.
- Accidental damage or breakage.
- Damage caused by use of unsuitable batteries.

#### Symbols on Package

|  |                                            |  |                                                     |
|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | Warning must be observed strictly.         |  | Authorized representative in the European community |
|  | Manufacturer                               |  | Consult instructions for use                        |
|  | Type "BF" IEC 60601-1                      |  | Date of manufacturing                               |
|  | WEEE - Electrical and electronic equipment |  |                                                     |


SYRO LIGHT Ltd  
15 Giron St. Yehud, 56217, IL

MEDES LIMITED, 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts. WD7 7AR, England. Tel / Fax: + 44 19 23859810

Production is certified for: ISO 9001 (2008), MDD 2007/47 EEC (2007), ISO 13485 (2003) Cert. No. 499/499CE

The phototherapy technology & indication are patented. The BioNette device is worldwide patent pending.

Made in Israel - Version 420.00. (rev 04) Date 01-12-2012

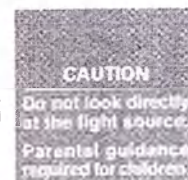

Operating Instructions →



**bionette**

Nasal Allergy Treatment

[Перевод с английского языка и иврита на русский язык]

НОТАРИУС АРЬЕ КОРЕЦ  
2 Ибн Гвириоль Стр., Тель-Авив  
П/я 20108, Тель-Авив  
Тел.: (972-3) 6963080, Факс: (972-3) 6963090

№ 11442

### УДОСТОВЕРЕНИЕ КОПИИ

Я, нижеподписавшийся нотариус **АРЬЕ КОРЕЦ**, адрес: 2 Ибн Гвириоль Стрит, Тель-Авив, настоящим удостоверяю, что прилагаемый документ с отметкой «А» является верной копией оригинала документа, который составлен на английском языке и был предъявлен мне.

В свидетельство чего я ставлю свою подпись и печать сегодня, 22 октября 2014 г.

ПОДПИСЬ  
/подпись/

ПЕЧАТЬ НОТАРИУСА  
[Печать нотариуса Арье Корец]

Взыскано: 71 шекель

[Рельефная печать нотариуса Арье Корец]

### АПОСТИЛЬ (Гаагская конвенция от 05 октября 1961 г.)

1. Страна: **ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ**  
Настоящий официальный документ
2. подписан Арье Корец,
3. выступающим в качестве Нотариуса,
4. скреплен печатью/штампом вышеуказанного Нотариуса.

### УДОСТОВЕРЕНО

5. в Окружном суде г. Тель-Авив – Яффа
6. Дата: 22 октября 2014 г.
7. должностным лицом, назначенным Министром юстиции согласно Закону о нотариате 1976 г.
8. за № 14665/14
9. Печать: Окружной суд г. Тель-Авив - Яффа
10. Подпись: /подпись/

[Штамп:

Пнина Эрез

22 октября 2014 г.

Окружной суд г. Тель-Авив]

## **Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette**

### **Инструкция по применению**

BioNette

Новое революционное устройство, предназначенное для лечения аллергического ринита (поллиноза). Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette дает облегчение и эффективно предотвращает симптомы, связанные с аллергическим насморком, такими как зуд в глотке, глазах, ушах, интраназальный зуд, ринорея, слезы, чихание, головная боль и слезотечение. Лечение не является ни химическим, ни фармакологическим, и не имеет известных побочных эффектов. Оно основано на принципе фототерапии (лечение с применением световой энергии). Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette использует технологию низкоуровневого узкополосного света.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Каждый сеанс лечения длится приблизительно 4,5 минуты. Рекомендуемая частота применения – два-три раза в день. Чтобы достичь максимального эффекта и наибольшей степени облегчения следует начать применение фототерапевтического медицинского устройства BioNette при появлении первых симптомов ринита. После улучшения состояния частоту применения BioNette можно постепенно снижать до полного исчезновения симптомов. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette является очень компактным устройством, которое может поместиться даже в самый маленький карман.

### **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ**

Пожалуйста, снимите прозрачную защитную ленту с батареи.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

#### **Как использовать:**

- Нажмите и удерживайте две резиновые кнопки по боковым сторонам прибора. Два выступающих зонда загораются красным светом.
- Убедитесь в том, что свет горит непрерывно и не мигает.
- Вставьте зонды в нос, одновременно удерживая обе резиновые кнопки.
- Отпустите обе кнопки.
- Сеанс лечения будет завершен, когда красное свечение автоматически прекратится, это произойдет примерно через 4 минуты. (После того, как сеанс начался, его нельзя прекратить по ходу лечебного цикла).
- Следуйте инструкциям по очистке, подробно описанным в прилагаемом информационном листке.
- Рекомендуемая частота применения – 2-3 раза в день. Повторное применение повышает эффективность лечения.

#### **Предостережение:**

**С осторожностью:** Использование детьми только под присмотром родителей.

Не смотрите прямо на источник красного света. Хранить в недоступных для детей месте.

### **ЗАМЕНА БАТАРЕЙ**

Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette содержит две высококачественные литиевые батареи CR2032 (3В). Снимите крышку и вставьте 2 (две) батареи в правильное положение согласно Рисунку № 1.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая терапия                  | Свет узкого диапазона частоты 630 нм                                                   |
| Мощность облучения                | Минимум 4 мВт для каждой ноздри                                                        |
| Энергетическая доза               | 2 Джоуля                                                                               |
| Таймер                            | Кнопка нажатия после начала работы автоматически отключается примерно через 4,5 минуты |
| Погрешность таймера               | $\pm 15\%$                                                                             |
| Источник электроэнергии           | 2 батареи CR2032 (3В)                                                                  |
| Сила тока (макс.)                 | 0,3 А                                                                                  |
| Срок службы батареек              | До 80 применений                                                                       |
| Показатель низкого заряда батарей | Активное мерцание светодиода                                                           |
| Вес устройства                    | 18 граммов с батареями                                                                 |
| Размер устройства                 | 52 x 38 x 15 см                                                                        |

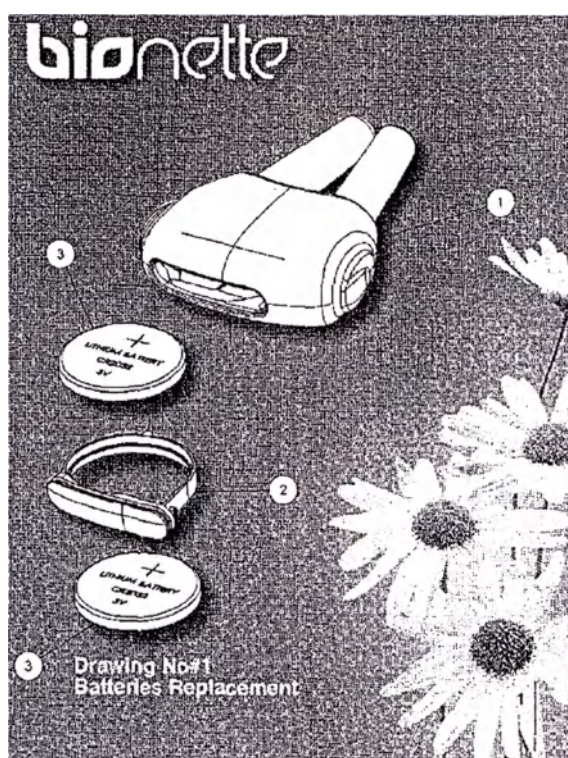


Рис. 1 Замена батареек

## ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нет подтвержденных данных о взаимодействии прибора с лекарственными средствами. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette можно использовать одновременно с приемом внутрь антигистаминных препаратов, кортикостероидов, а также препаратов для снятия заложенности.

## ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Нет данных о появлении побочных эффектов при использовании данного устройства. Пациенты, страдающие тяжелой формой аллергического ринита, могут применять фототерапевтическое медицинское устройство BioNette более трех раз в день, не опасаясь вредного побочного воздействия.

## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ СЕРИИ BIOLIGHT

Продуктовая линия BIOLIGHT – одним из составляющих которой является фототерапевтическое медицинское устройство BioNette – представляет собой серию

медицинских устройств, использующих технологию низкоуровневого узкополосного света для проведения неинвазивного, немедикаментозного лечения.

Эта продукция была разработана командой ученых и врачей, специализирующихся на фотобиологии и фототерапии. Использование продукции подтверждено клиническими и научными данными, полученными во многих больницах и клиниках, некоторые из которых были опубликованы в престижных медицинских изданиях по всему миру. Этот продукт является значительным прорывом в нефармакологическом лечении. Его воздействие впечатляет, и при этом он не имеет известных побочных эффектов. Появление фототерапевтического медицинского устройства BioNette является революционно новым нефармакологическим альтернативным способом лечения аллергических ринитов.

Продукция серии BIOLIGHT включает также BIOSTICK, BIOBEAM 660, BIOBEAM 940, и BIOBEAM ACNE.

## ОЧИСТКА

• **Очистка:** Источник света следует протирать мягкой влажной тканью с очищающим раствором. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette ни в коем случае нельзя погружать в воду. • **Стерилизация:** Рекомендуется протирать световые источники тканью, смоченной в 70%-м растворе этилового спирта. • **Гигиеническая защита:** рекомендуется хранить прибор в максимально возможных гигиенических условиях.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                       | Возможная причина                  | Решение                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Красная лампочка не загорается | Батареи старые или разряженные     | Заменить батареи                                                                        |
|                                | Батареи были неправильно вставлены | Поставьте батареи правильно                                                             |
|                                | BioNette неисправен                | Если вышеуказанные способы не решают проблему, обратитесь к вашему местному поставщику. |
| Красная лампочка мигает        | Батареи разряжены                  | Замените батареи                                                                        |

## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ СРОКОМ

Гарантия предоставляется покупателю, приобретающему устройство, и подтверждает тот факт, что устройство не имеет дефектов материала и находится в исправном рабочем состоянии.

Гарантия действует в течение двух лет с момента покупки.

Гарантия распространяется на ремонт и бесплатную замену запасных частей, которые, по мнению изготовителя, были повреждены во время эксплуатации, когда устройство использовалось в соответствии с инструкцией, выданной производителем.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- Неправильное использование
- Ремонт, осуществляемый не производителем и не официально назначенным им представителем
- Случайное повреждение или поломка
- Повреждение вследствие использования неподходящих батарей

## ВНИМАНИЕ

Не смотреть прямо на источник света.

Использование детьми только под присмотром родителей.

# Обозначения на упаковке

|                                                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Следует строго соблюдать все предостережения                     |  | Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе |
|  | Изготовитель                                                     |  | Во время эксплуатации следуйте инструкциям.           |
|  | Стандарт электробезопасности в соответствии с 60601-1. Тип "BF". |  | Дата изготовления                                     |
|  | Утилизация электрического и электронного оборудования            |                                                                                   |                                                       |



«СироЛайт Лтд»

15, Жирон стрит, Ехуд, 56217, Израиль (15, Giron St, Yehud, 56217, IL)

«МЕДЕС ЛИМИТЕД», 5, Бомонт Гейт, Шенли Хилл, Радиетт, Хертс, WD7

7AR, Англия (5, Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts, WD7 7AR, England)



Тел/Факс + 44 19 23859810



CE 0473

Продукт сертифицирован в соответствии с ISO 9001 (2008), MDD2007/47, EEC (2007), ISO 13485 (2003)

Сертификат № 499/499CE


Технология и показания к фототерапии запатентованы.

Патентная заявка на устройство BioNette находится на рассмотрении.

Сделано в Израиле – Версия 420.00 (ред.04) Дата 01.12.2012 г.

**Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette**  
**Лечение аллергического ринита**

Перевод данного текста с английского языка и иврита на русский язык сделан мной, переводчиком Шифановым Вячеславом Васильевичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.  
Принимаю на себя личную ответственность за верность выполненных мною переводов.

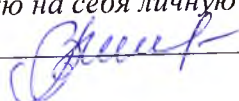  
Город Москва.

Двадцать первого мая две тысячи пятнадцатого года.

Я, Мелешин Александр Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Шифановым Вячеславом Васильевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-4034

Взыскано по тарифу: 100 руб.



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 9 листов.

Нотариус 



**SyroLight Ltd**

**סירוליט בע"מ**

«Confirm accuracy, correctness and authenticity  
Of the texts contents of Russian translations»

**Дополнение к инструкции по применению  
Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette  
производства «СироЛайт Лтд.», Израиль**

 **Syro**  
15 Giron St.,  
Exporter  
Signature

2015

רח' גירון 15, יהוד, 56217, Tel: 972-3-5332274, Fax: 973-2-5332275, 56217



# SyroLight Ltd

# סירוליט בע"מ

BioNette

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

|                         | Эксплуатация         | Транспортировка, хранение |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Температура             | От +15 °С до +40 °С  | От -10 °С до +40 °С       |
| Относительная влажность | От 30% до 85%        | До 80%                    |
| Атмосферное давление    | От 86 кПа до 106 кПа | От 86 кПа до 106 кПа      |

Хранить изделие следует, не подвергая воздействию коррозионного газа, в хорошо проветриваемом сухом помещении.

Избегать попадания дождевой воды и нагревания солнечными лучами в процессе транспортировки.

## СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette
2. Батарея литиевая (CR2032, 3 В) – 2 шт.
3. Инструкция по применению
4. Пластиковый контейнер

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette предназначено для индивидуального применения в домашних условиях без контроля врача

Каждый сеанс лечения длится приблизительно 4,5 минуты, в зависимости от погрешности таймера на каждом конкретном устройстве. Рекомендуемая частота применения – два-три раза в день. Чтобы достичь максимального эффекта и наибольшей степени облегчения следует начать применение фототерапевтического медицинского устройства BioNette при появлении первых симптомов ринита. После улучшения состояния частоту применения BioNette можно постепенно снижать до полного исчезновения симптомов. Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette является очень компактным устройством, которое может поместиться даже в самый маленький карман.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Световая терапия                                     | Узкополосный свет – 630 нм      |
| Минимальная мощность облучения                       | 4,0 мВт для каждой ноздри       |
| Максимальная мощность облучения                      | 10,0 мВт для каждой ноздри      |
| Энергетическая доза                                  | 2 Джоуля                        |
| Таймер<br>(автоматическое отключение кнопки нажатия) | 4,5 минуты                      |
| Погрешность таймера                                  | -/+ 15%                         |
| Источник электроэнергии                              | 2 батареи CR2032 (3В)           |
| Сила тока (макс.)                                    | 0,03 А                          |
| Срок службы батареек                                 | До 80 применений                |
| Показатель низкого заряда батарей                    | Активное мерцание светодиода    |
| Вес устройства                                       | 18 ± 1 г с батареей             |
| Размер устройства                                    | 52x38x15 мм (допуски: ± 0.5 мм) |

Light  
:ahud 56217  
10: 51-39

רח' גירון 15, יהוד, 56217, Tel: 972-3-5332274, Fax: 973-2-5332275, 56217



**SyroLight Ltd**

**סירוליט בע"מ**


|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип установки и пользования | Ручное                                                               |
| Режим работы                | Непрерывный                                                          |
| Подключение к сети          | Внутреннее питание                                                   |
| Диаметр зондов              | в верхней части – $6,76 \pm 0.5$ мм,<br>в нижней – $7,88 \pm 0.5$ мм |
| Длина зондов                | $28.75 \pm 0.5$ мм                                                   |
| Расходимость излучения      | $\pm 20\%$                                                           |
| Тип рабочей части           | BF                                                                   |
| Характеристики светодиода:  |                                                                      |
| - световой поток            | 2,995 лм                                                             |
| - цветовая температура      | 500 К                                                                |

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют

### МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Фототерапевтическое медицинское устройство BioNette утилизируется согласно Европейской Директиве Утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), согласно которой конечный пользователь должен поместить его в специальные отходы. Также при утилизации устройства и его упаковки, требуется обеспечить обязательное выполнение всех необходимых процедур в соответствии с местными применимыми законами и нормативными положениями.

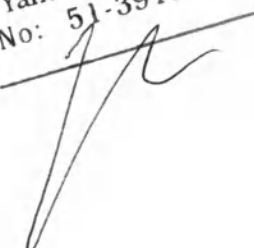 **SyroLight Ltd**  
15 Giron St., Yehud 56217, Israel  
Exporter No: 51-391300-4  
Signature 

**td**  
Israel  
1300-4

Перевод с английского на русский язык печатей, подписей, штампов Дополнения к инструкции по применению на медицинское изделие BioNette:

Логотип компании: «СироЛайт Лтд.»

Слоган компании:

«Подтверждаем аккуратность, корректность и аутентичность

Из содержания текстов русских переводов»

Штамп:

СироЛайт Лтд

15 Гирон Ст., Яхуд 56217, Израиль

Номер экспортера: 51-391300-4

Подпись:

Подпись от руки

Перевод выполнен переводчиком  
Чимпоеш Еленой Анатольевной.

\*



Город Москва.

Пятого ноября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Чимпоеш Еленой Анатольевной в моем присутствии. Личность установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4.62849  
Взыскано госпошлины (по тарифу): 100 рублей  
ВРИО Нотариуса:



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 4

листа (ов)

ВРИО Нотариуса:

