

Утверждаю:
Генеральный директор
ЗАО «Рузаевский
стеклянный завод»



А.Ю.Михайлов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бутылки стеклянные для крови,
трансфузионных и инфузионных препаратов П-100-2-МТО, П-250-2-МТО
и П-450-2-МТО по ГОСТ 10782-85

Стеклянные бутылки, предназначенные для донорской крови, ее компонентов, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов.

Область применения – инфузионная терапия, переливание крови и кровезаменителей.

Бутылки предназначены для расфасовки и хранения крови, ее компонентов, инфузионных и трансфузионных препаратов.

Условия применения: лечебные, лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, медицинские центры и другие медицинские учреждения.

Способ применения:

1. Провести визуальный осмотр бутылок на предмет отсутствия повреждений после транспортировки.
2. Проверить наличие штампа ОТК производителя.
3. Вымыть бутылки дезинфицирующими и моющими средствами любого состава в соответствии с инструкциями и регламентами по санитарно-химической подготовке стеклотары к использованию.
4. Промыть бутылки водой для инъекций.
5. Разлить препарат
6. Утилизацию бутылок после использования по назначению следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790, отходы группы Б.

Противопоказания:

Отсутствуют

Меры предосторожности:

Применение ершей и абразивных средств и составов для мойки бутылок группы 2 не допускается

При повторном применении бутылок обязательно проведение испытаний на химическую стойкость.

Комплект поставки:

1. Партия бутылок
2. Инструкция по применению

- 1 экз.

Маркировка:

На дне бутылки должна быть нанесена маркировка с указанием:

товарного знака предприятия-изготовителя;

номера формы;

цифры 2 - для бутылок группы 2.

На потребительской упаковке (коробке) должны быть указаны:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение бутылок;
- номер партии;
- надпись «НЕТОКСИЧНО»;
- условия хранения;
- условия утилизации;
- номер регистрационного удостоверения и дата регистрации;
- срок годности – слова «Годен до...».

Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

наименования изделия с указанием типа;

номинальной вместимости;

марки стекла или условного обозначения изделия;

номера партии;

количества бутылок в партии;

обозначения настоящего стандарта;

номера или фамилии контролера-сортировщика (комплектовщика);

даты изготовления.

На транспортную (групповую) упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги», «Хрупкое, Осторожно», «Ограничение температуры».

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +25°C, влажность не более 80%. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования:

Бутылки стеклянные в групповой таре транспортируются всеми видами транспорта в закрытых, сухих и чистых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура от +5°C до +25°C, влажность не более 80%.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия медицинского назначения Пакета-горчичника требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Утилизация:


Утилизацию бутылок после использования по назначению следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10.

Начальник производства



Пчеляков К.С.

Приман 4 сиренной
платно 3м 02
Генеральной директор
ЗАО Рузевский
являю

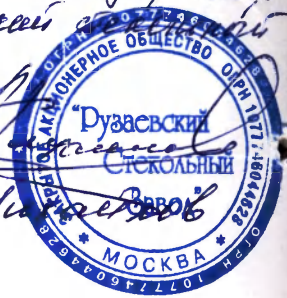

А. Н. Михайлов