

公 证 书

NOTARIAL CERTIFICATE

中华人民共和国福建省泉州市通淮公证处

Quanzhou Tong Huai Notary Public Office, Fujian Province, P.R.C.

NAN AN YUAN DA SANITARY PRODUCTS FACTORY

Add: South Side of North Liumei Road, Meilin Office, Nan'An City, Fujian Province, China, Zip Code: 362300

Tel.: +86 595 28122538

Fax: +86 595 22257518

Website: www.chinayuanda.com

Email: hygieneproduct@163.com

Diapers for adults "PROTECT"

User's manual

Purpose of use: Diapers for adults «Protect» (hereinafter - diapers, product) in variants:

- for moderate degree of urinary incontinence of the following sizes: S, M, L, XL;

- for severe degree of urinary incontinence of the following sizes: S, M, L, XL;

Diapers are designed for urine and fecal matter sorption of the adult patient, suffered with moderate and severe degree of incontinence, and serve as prophylactic measure to avoid pressure injuries of bedridden patients.

Description: Diapers for adults «Protect» are non-sterile disposable underwear of pants form made of absorbing material with vertical bumpers, providing extra protection against of leakage; it is wearied between legs, collect urine and fecal matter of the adult patient, suffered with incontinence. Diapers are fitted with special Velcro, allowing for ease of dressing. When buying important to consider the waist and hips of the patient. Diapers have vertical bumpers provide

Sizes: S – waist volume 60-85 cm; M - waist volume 90-120 cm; L - waist volume 100-150 cm; XL- waist volume 120-160 cm.

Diaper structure is outlining shown on Fig.1

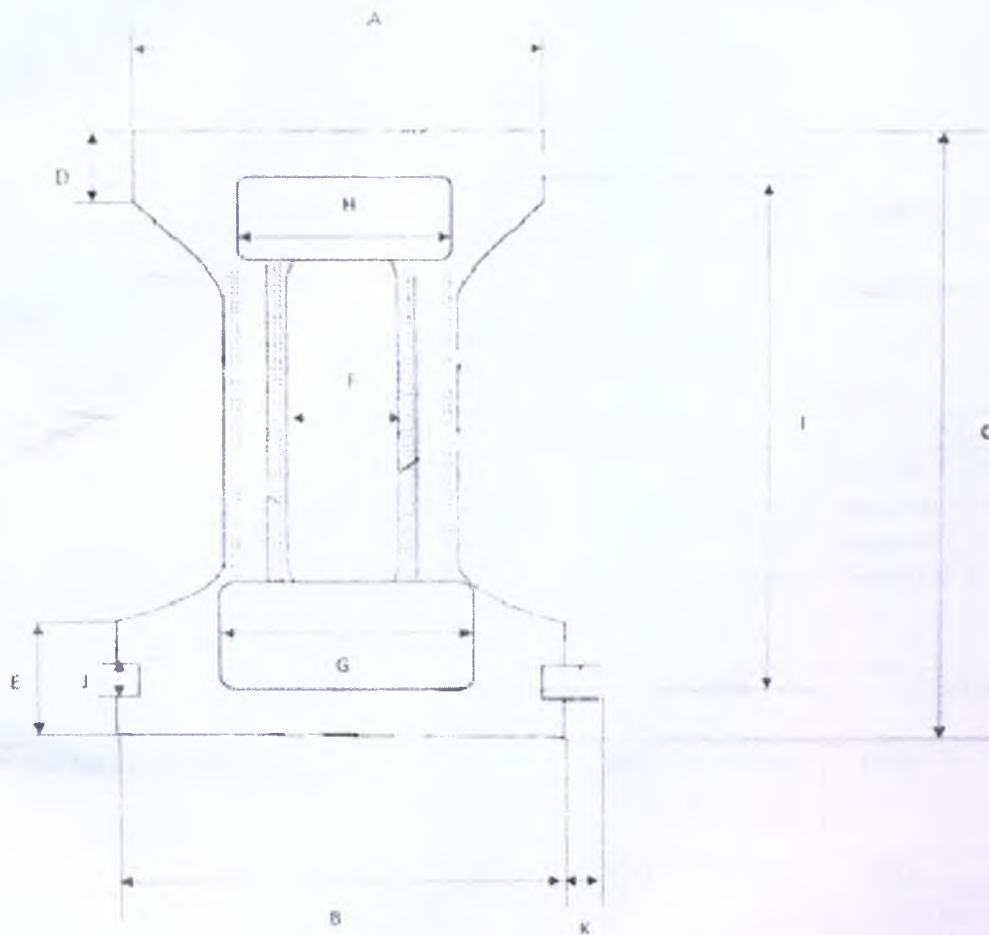


Fig.1 Diaper structure with dimensions.

A-Diaper waist frontal part's width

NAN AN YUAN DA SANITARY PRODUCTS FACTORY

Add: South Side of North Liumei Road, Meilin Office, Nan'An City, Fujian Province, China, Zip Code: 362300

Tel.: +86 595 28122538

Fax: +86 595 22257518

Website: www.chinavuanda.com

Email: hygieneproduct@163.com

- B- Diaper waist back part's width
- C- Diaper length in expanded form
- D- Diaper frontal part side's height
- E- Diaper back part side's height
- F- Absorbing layer width in the medium part
- G- Absorbing layer width in the back part
- H- Absorbing layer width in the frontal part
- I- Absorbing layer length
- J- Outpouching part of Velcro tape width
- K- Outpouching part of Velcro tape length

Tab.2 Diaper dimensions.

Parameter/ size	S	M	L	XL
A, cm within	50±0,5	64±0,5	74±0,5	83±0,5
B, cm within	50±0,5	64±0,5	74±0,5	83±0,5
C, cm within	72±0,5	80±0,5	90±0,5	99±0,5
D, cm within	18,5±0,5	19±0,5	19±0,5	20±0,5
E, cm within	22,5±0,5	23±0,5	23±0,5	25±0,5
F, cm within	17±0,3	17±0,5	17±0,5	17±0,5
G, cm within	33±0,5	36±0,5	36±0,5	36±0,5
H, cm within	28±0,5	32±0,5	32±0,5	32±0,5
I, cm within	60±0,5	68±0,5	80±0,5	80±0,5
J, cm within	2,5±0,2	2,5±0,5	2,5±0,5	2,5±0,5
K, cm within	4,5±0,2	4,5±0,5	4,5±0,5	4,5±0,5

The thickness of diaper absorbing layer for moderate degree of urinary incontinence (all sizes) is within 0,6±0,1 cm;

The thickness of diaper absorbing layer for severe degree of urinary incontinence (all sizes) is within 0,8±0,1 cm.

Tab.3 Requirements to the functional use index of adult diapers «Protect»

Size/ index	S		M		L		XL		Test method
	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	
Waist volume, cm	60-85		90-120		100-150		120-160		
Full liquid absorption, gr, not less	1000	1400	1300	1800	1450	2000	1450	2800	By 12.3
Absorption capacity after centrifugation, gr, not less	120	300	220	440	330	500	330	560	By 12.4
Resorption, gr,	4,4								By

NAN AN YUAN DA SANITARY PRODUCTS FACTORY

Add: South Side of North Liumei Road, Meilin Office, Nan'An City, Fujian Province, China, Zip Code: 362300

Tel.: +86 595 28122538

Fax: +86 595 22257518

Website: www.chinayuanda.com

Email: hygieneproduct@163.com

not less		12.5
Absorption time, m ³ /sec, not less	2,3	By 12.6

Requirements to the functional use index of adult diapers «Protect» are shown in Tab.3, according to size range.

Tab.4 Specification of Adult diapers «Protect»

Size/ index	S		M		L		XL	
	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence	For the moderate degree of incontinence	For severe incontinence
Diaper weight, gr within	100±10	110±10	110±10	120±10	120±10	130±10	130±10	140±10
Absorbing layer weight, gr within	56±5	58±5	57±5	60±5	62±5	65±5	67±5	70±5
SAP weight, gr within	5,5±0,5	6±0,5	6,5±0,5	7±0,5	7,5±0,5	8±0,5	8,5±0,5	9±0,5

Weight of end product 1 piece (at exact index and variant of producing) is evaluated in technical documentation and shown in Tab.4

Composition: upper covering layer (contacts the skin and temporary the mucous membrane) consists of nonwoven Hydrophilic & hydrophobic material - polypropylene PP model HPI15 (CAS № 9003-07-0), produced by ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co., Ltd, (China); distributing layer consists of tissue paper made of cellulose model WSP16 produced by Yinge, (China) and cellulose model PW416/GP CELLULOSE 4871/4872 Weyerhaeuser Company (USA); absorbing layer consists of super absorbent San-dia model IM930 (CAS №9003-04-7), produced by Sandia Corporation (Japan); protection layer consists of insulating film - polyethylene LDPE model PF22 (CAS № 9003-07-0), produced by ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co., Ltd (China); lower covering layer consists of nonwoven hydrophobic material - polypropylene PP model HPI15 (CAS № 9003-07-0), produced by ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co., Ltd (China); There are barrier elements - nonwoven Hydrophilic & hydrophobic material - polypropylene PP model HPI15 (CAS № 9003-07-0), produced by ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co., Ltd (China) and fixation elements - 3-ply tape model H6218, produced by Tekang Co. (China), elastomeric buckle - elastane model 940B, produced Hyosung (South Korea) /Asahi Kasei (Japan); layers are connected with glue - Focus Adhesive model T101/DM5305, produced by Henkel Co. Ltd (China); Composition: styrene-butadiene block copolymer (CAS №9003-55-8) – 18%; naphthenic processing oil (CAS №64742-52-5) – 24%; pentaerythritol ester of rosin (CAS № 050-26-8) – 30%; petroleum hydrocarbon resin (CAS №64742-16-1) - 27%; antioxidant -1%.

Usage: Before use, the patient should be washed away with warm water and wiped well. Put the diaper on the pelvis of the patient (if the patient is bedridden, gently put a diaper under him), flank by Velcro tape. Diaper filling time is individually - from 400 to 600 ml for 8h with a moderate degree of incontinence and more than 600 ml for 8 hours with severe incontinence.

NAN AN YUAN DA SANITARY PRODUCTS FACTORY

Add: South Side of North Liumei Road, Meilin Office, Nan'An City, Fujian Province, China, Zip Code: 362300

Tel.: +86 595 28122538

Fax: +86 595 22257518

Website: www.chinavuanda.com

Email: hygieneproduct@163.com

Contraindications: Do not use for patients with individual intolerance, the external genitalia diseases and digestive dysfunction.

Precautions: Prolonged use of the diaper can cause diaper rash. If evacuation has not happened for a few hours, the diaper should be changed to a new one.
Reusing is forbidden. Using for other purposes is forbidden.

Storage: Diapers for adult "Protect" should be stored in a clean, dry, dark place in the original package at a temperature of 2 ° C to 40 ° C.

Diapers should be stored out of the reach of children.

Do not store diapers near heaters and exposure to extreme temperatures. Do not store near objects diapers has a strong odor (household chemicals). Avoid contact with moisture on the clean diapers.

Transportation: Diapers for adult "Protect" are transported in accordance with GOST 6658 (Section 3) any kind of covered transport in accordance with the rules of carriage of goods, operating in this mode of transport. Conditions of carriage - for a group of 5 to GOST 15150 can be transported at a temperature of -40 ° C to + 40 ° C, humidity of 10-100%, atmospheric pressure 500-1060 kPa.

Manufacturer's Warranty: The manufacturer Nan An Yuanda Sanitary Products Factory, China, and it's authorized representative: Limited Liability Company "Eurasia-Trade" ("Eurasia-Trade" LLC) 660017, Krasnoyarsk region, Krasnoyarsk city, Krasnoy Army Street, 10, Building 3, room 202 www.eurasiatr.ru e-mail: info@eurasiatr.ru Tel .: +7 (391) 290-64-07 guarantees the declared diapers for adults "Protect" meet declared properties until the expiration date, subject to the rules governing the storage, use and transportation.


Shelf life - 3 years from manufacturing date indicated on the package. Do not use after shelf life expiration.

Diapers are one-used product and needn't service and technical support and repairing.

Utilization information: If necessary, decontamination of used diapers carried out according to Medical wastes handling requirements.

Packaging is utilized in household waste collection site. Diapers are utilized according to SanPin 2.1.7.2790-10 "Sanitary and epidemiological requirements for the management of medical waste" as wastes of class A (epidemiologically non-hazardous wastes, close to solid household wastes in composition).

Do not burn! Do not throw down the drain!

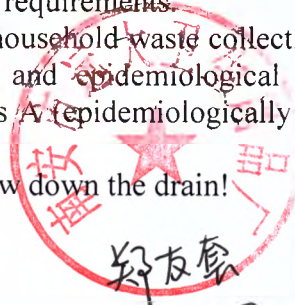

公 证 书

(2016) 闽泉通证字第 416 号

申请人：南安市远大卫生用品厂， 住所： 南安市美林办事处柳
美北路南侧，

企业法人营业执照注册号： 350583100020640

法定代表人：郑友套，男

公证事项： 签名、印鉴

兹证明南安市远大卫生用品厂的法定代表人郑友套于二〇一六年
四月十一日来到我处，在本公证员的面前，在前面的 DIAPERS FOR
ADULTS “PROTECT” USER’ S MANUAL 上签名、盖章。

中华人民共和国福建省泉州市通淮公证处

公证员

许小君

二〇一六年四月十一日

NOTARIAL CERTIFICATE

(Translation)

(2016)MQTZ.Zi.No.416

Applicant: NAN AN YUANDA SANITARY PRODUCTS
FACTORY, of South Side of North Liumei Road, Meilin Office, Nan'An
City, with *Business License For A Sole Proprietorship Enterprise*
Registration No.: 350583100020640

Legal representative: Zheng Youtao, male

Issue under notarization: Signature and seal

This is to certify that Zheng Youtao, legal representative of NAN
AN YUANDA SANITARY PRODUCTS FACTORY, came to our notary
public office and affixed his signature and the company seal onto the
foregoing **DIAPERS FOR ADULTS "PROTECT" USER'S MANUAL**
on April 11, 2016, before me, the notary public.

Quanzhou Tonghuai Notary Public Office

Fujian Province

The People's Republic of China

Notary Public: Xu Xiaojun

April 11, 2016

НОТАРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Общественная нотариальная контора Тунг Хуай г. Цюаньджоу, провинция Фуцзянь,
КНР

Подгузники для взрослых «Protect»

Инструкция по применению

Показания к применению: Подгузники для взрослых «Protect» в вариантах исполнения:

- для средней степени недержания, следующих типоразмеров: S, M, L, XL;
- для тяжелой степени недержания, следующих типоразмеров: S, M, L, XL.

Подгузники предназначены для сбора мочи и фекальных масс взрослых пациентов, страдающих средней и тяжелой степенью недержания, являются профилактической мерой от возникновения пролежней у лежачих больных.

Описание: Подгузники для взрослых «Protect» представляют собой нестерильное одноразовое нижнее белье, выполненное в виде раскроя трусов из впитывающего материала с вертикальными бортиками, обеспечивающими дополнительную защиту от протекания, носится между ног, собирает мочу и фекальные массы взрослого пациента, страдающего недержанием. Подгузники для взрослых «Protect» оснащены специальными застежками-липучками, обеспечивающими легкость одевания. При покупке важно учитывать обхват талии и бедер больного.

Размеры: S - объем талии 60-85 см; M - объем талии 90-120 см; L - объем талии 100-150 см; XL - объем талии 120-160 см.

Конструкция подгузника схематично представлена на Рис.1.

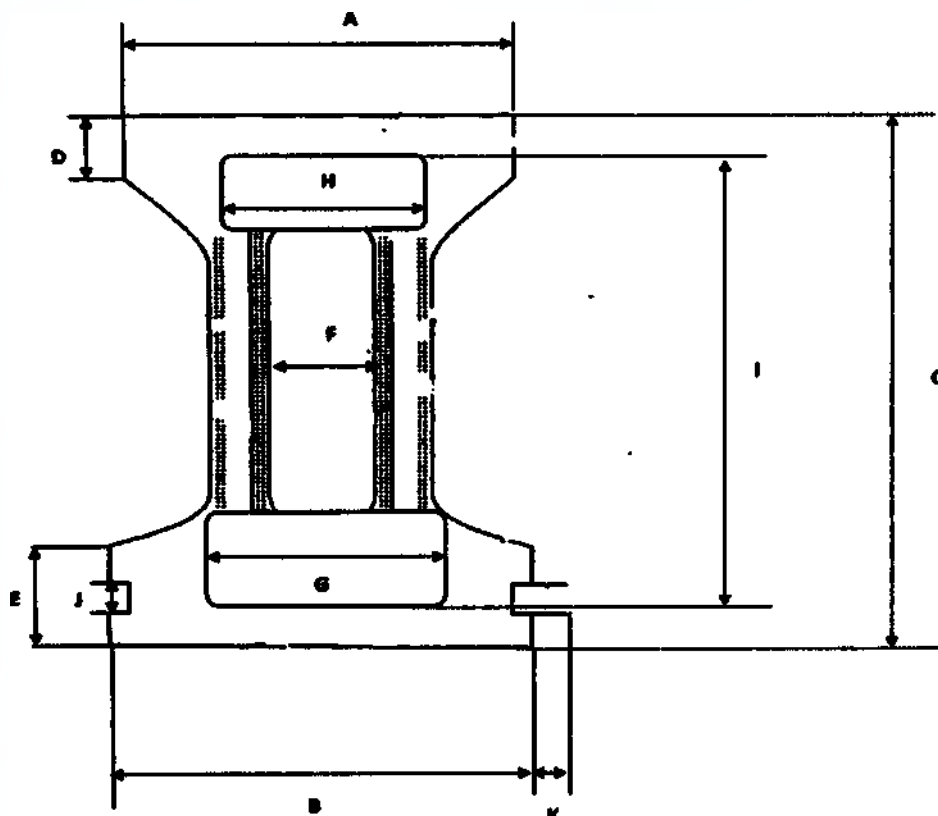


Рис. 1 Схема подгузника с обозначением линейных размеров

A – Ширина передней части подгузника по талии

В – Ширина задней части подгузника по талии
 С – Длина подгузника в растянутом виде
 D - Высота боковины передней части подгузника
 E - Высота боковины задней части подгузника
 F - Ширина абсорбционного слоя в средней части
 G - Ширина абсорбционного слоя в задней части
 H - Ширина абсорбционного слоя в передней части
 I - Длина абсорбционного слоя
 J - Ширина выступающей части липучки
 K - Длина выступающей части липучки

Таблица 2 Линейные размеры подгузника

Параметр/Размер	S	M	L	XL
A, см в пределах	50±0,5	64±0,5	74±0,5	83±0,5
B, см в пределах	50±0,5	64±0,5	74±0,5	83±0,5
C, см в пределах	72±0,5	80±0,5	90±0,5	99±0,5
D, см в пределах	18,5±0,5	19±0,5	19±0,5	20±0,5
E, см в пределах	22,5±0,5	23±0,5	23±0,5	25±0,5
F, см в пределах	17±0,3	17±0,5	17±0,5	17±0,5
G, см в пределах	33±0,5	36±0,5	36±0,5	36±0,5
H, см в пределах	28±0,5	32±0,5	32±0,5	32±0,5
I, см в пределах	60±0,5	68±0,5	80±0,5	80±0,5
J, см в пределах	2,5±0,2	2,5±0,5	2,5±0,5	2,5±0,5
K, см в пределах	4,5±0,2	4,5±0,5	4,5±0,5	4,5±0,5

Толщина впитывающего слоя подгузников для средней степени недержания (всех типоразмеров) находится в пределах 0,6±0,1 см;

Толщина впитывающего слоя подгузников для тяжелой степени недержания (всех типоразмеров) находится в пределах 0,8±0,1 см;

Таблица 3 Требования к показателям, обеспечивающим функциональное назначение Подгузников для взрослых «Protect»

Размер	S		M		L		XL		метод
	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	
Наименование показателей									
Объем талии, см	60-85		90-120		100-150		120-160		
Полное влагопоглощение, г, не менее	1000	1400	1300	1800	1450	2000	1450	2800	12.3
Сорбционная способность после центрифугирования г, не менее	120	300	220	440	330	500	330	560	12.4
Обратная сорбция, г, не более	4,4								12.5

НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ
Адрес: Саус сайд оф Норф Люмэй роад, Мэйлин офис, г. Наньань, пр. Фуцзянь,
Китай, индекс:362300

Тел: +8659528122538
Вебсайт: www.chinayuanda.com

факс: +8659522257518
e-mail:hygieneproduct@163.com

Скорость впитывания, см ³ /с, не менее	2,3	-	12.6
---	-----	---	------

В таблице 3 указаны требования к показателям, обеспечивающим функциональное назначение Подгузников для взрослых «Protect», соответственно размерному ряду.

Таблица 4 Спецификация Подгузников для взрослых «Protect»

Размер	S		M		L		XL	
	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания	Для средней степени недержания	Для тяжелой степени недержания
Масса погузника, г в пределах	100±10	110±10	110±10	120±10	120±10	130±10	130±10	140±10
Масса абсорбирующего слоя, г в пределах	56±5	58±5	57±5	60±5	62±5	65±5	67±5	70±5
Масса супер-сорбента, г в пределах	5,5±0,5	6±0,5	6,5±0,5	7±0,5	7,5±0,5	8±0,5	8,5±0,5	9±0,5

Масса 1 шт готовых изделий (при конкретных значениях размеров и варианта исполнения) установлена в технологической документации и указана в Таблице 4.

Состав: верхний покровный слой (соприкасается с кожей и, кратковременно, со слизистыми оболочками) состоит из нетканого гидрофильно-гидрофобного материала – полипропилен PP марки HPI15 (CAS№ 9003-07-0), производства ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co.,Ltd, Китай; распределительный слой состоит из бумаги гигиенической из целлюлозы марки WSP16, производства Yinge (Китай) и целлюлоза марки PW416/GP CELLULOSE 4871/4872 Weyerhaeuser Company (США); абсорбирующий слой состоит из суперабсорбента San-dia марки IM930 (CAS№ 9003-04-7), производства Sandia Corporation (Япония); защитный слой состоит из изоляционной пленки - полиэтилен LDPE марки PF22 (CAS№ 9002-88-4) ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co.,Ltd (Китай); нижний покровный слой состоит из нетканого гидрофобного материала - полипропилен PP марки HPI15 (CAS№ 9003-07-0), производства ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co.,Ltd (Китай). Имеются барьерные элементы - нетканый материал гидрофильно-гидрофобный – полипропилен PP марки HPI15 (CAS№ 9003-07-0), производства ShiJiaZhuang HuanQiu Chemicals Co.,Ltd (Китай), и фиксирующие элементы 3-слойные липучки марки H6218, производства Tekang Co (Китай), эластомерная пряжа резинки - эластан марки 940B, производства Hyosung (Ю. Корея) /Asahi Kasei (Япония); слои скреплены клеем Focus Adhesive марки T101/DM5305, производства Henkel Co. Ltd, (Китай). Состав: блок-сополимер бутадиена и стирола (CAS №9003-55-8) – 18%; нефтяное масло (CAS №64742-52-5) – 24%; пентаэритритированный эфир канифоли (CAS №8050-26-8) – 30%; углеводородный полимер (CAS №64742-16-1) – 27%; антиоксидант 1%..

Порядок применения: Перед использованием пациента следует подмыть теплой водой, и хорошо вытереть. Надеть подгузник на таз пациента (если больной лежачий, аккуратно подложить подгузник под него), по бокам зафиксировать липучками.

Время заполнения подгузника индивидуально, от 400 мл до 600 мл за 8 ч при средней степени недержания и более 600 мл за 8 ч при тяжелой степени недержания.

НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ

Адрес: Саус сайд оф Норф Льюмэй роад, Мэйлин офис, г. Наньань, пр. Фуцзянь,

Китай, индекс:362300

Тел: +8659528122538

факс: +8659522257518

Вебсайт: www.chinayuanda.com

e-mail: hygieneproduct@163.com

Противопоказания: Не использовать пациентам с индивидуальной непереносимостью, заболеваниями наружных половых органов, пищеварительной дисфункцией.

Меры предосторожности: Длительное использование подгузника может привести к опрелостям, раздражению кожи в области промежности. Если опорожнение не произошло в течении нескольких часов, подгузник следует сменить на новый. Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Хранение: Подгузники для взрослых «Protect» хранят в чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от 2 °С до 40 °С.

Подгузники следует хранить в местах, недоступных для детей.

Запрещено хранить подгузники рядом с нагревательными приборами и в местах с повышенной температурой. Запрещено хранить подгузники рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия). Избегать попадания влаги на чистые подгузники.

Транспортирование: Подгузники для взрослых «Protect» транспортируют по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки — по группе 5 ГОСТ 15150. Допускается транспортировка при температуре от -40 °С до +40 °С, влажности 10-100%, атмосферном давлении 500-1060 кПа.

Гарантия изготовителя: Изготовитель Nan An Yuanda Sanitary Products Factory, China (Нань Ань Юаньда Санитари Продуктс Фэктори, Китай) и уполномоченный представитель изготовителя в РФ ООО «Евразия-Трэйд», Россия, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, улица Красной Армии, дом 10, стр. 3, офис 202 www.eurasiatr.ru, e-mail: info@eurasiatr.ru (тел. +7(391) 2595982) гарантируют соответствие подгузников для взрослых «Protect» заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности – 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Подгузники применяются одноразово и не требуют сервисного, технического обслуживания и ремонта.

Сведения об утилизации: При необходимости обеззараживание использованных подгузников осуществляют согласно требованиям к обращению с медицинскими отходами.

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

Подгузники утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

Не сжигать! Не бросать в канализацию!

Печать: НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ

Подпись:

07.04.2016

НОТАРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

(2016) MQTZ.Zi.No.416

Заявитель: НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ, адрес: Саус сайд оф Норф Люмэй роад, Мэйлин офис, г. Наньань, бизнес лицензия для частных предприятий за номером: 350583100020640

Официальный представитель: Дженг Йоутао, муж,

Предмет заверения: подпись и печать

Настоящим удостоверяется, что Джен Йоутао, официальный представитель НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ подписал и поставил печать компании на документе: «Подгузники для взрослых «Protect» Инструкция по применению» 11 апреля 2016 года, в присутствии меня, общественного нотариуса.

Общественная нотариальная контора Тунхуай г. Цюаньджоу

Провинция Фуцзянь

..

Китайская народная республика

Нотариус: Сюй Сяоцзун: подпись

11 апреля 2016

НОТАРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

(перевод)

(2016) MQTZ.Zi.No.416

Заявитель: НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ, адрес: Саус сайд оф Норф Люмэй роад, Мэйлин офис, г. Наньань, бизнес лицензия для частных предприятий за номером: 350583100020640

Официальный представитель: Дженг Йоутао, муж,

Предмет заверения: подпись и печать

Настоящим удостоверяется, что Джен Йоутао, официальный представитель НАНЬ АНЬ ЮАНЬДА САНИТАРИ ПРОДУКТС ФЭКТОРИ подписал и поставил печать компании на документе: «Подгузники для взрослых «Protect» Инструкция по применению» 11 апреля 2016 года, в присутствии меня, общественного нотариуса.

Общественная нотариальная контора Тунхуай г. Цюаньджоу

Провинция Фуцзянь

Китайская народная республика

Нотариус: Сюй Сяоцзун: подпись

11 апреля 2016

Перевод с английского и
китайского языков на русский
язык верен.
Переводчик: Максимчук Анна
Рубиновна Олига

Город Красноярск, Красноярский край.

Двадцать седьмое апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Терская Елена Викторовна, нотариус Красноярского нотариального округа, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком гр. **Максимчук Ниной Рубиновной** в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 294 1295

Взыскано госпошлины (по тарифу): 500 руб. (в соответ. со ст. ст. 15, 23 Основ законодательства РФ о нотариате)

Нотариус:

Е.В. Терская



Всего прошнуровано, пронумеровано и печатью
нотариса Красноярского нотариального округа
Российской Федерации Терской Елены Викторовны
скреплено 13 (тринадцать) листов.

Нотариус:

Е.В.Терская

