


Фотографические изображения
медицинского изделия

Тест-система BioTracer FOB для иммунохроматографического выявления скрытой крови в кале человека (Приложение 1), производства «Био Фокус Ко., Лтд.» (Bio Focus Co., Ltd.), Копия

Тест-система BioTracer FOB для иммунохроматографического анализа
Состав №1:

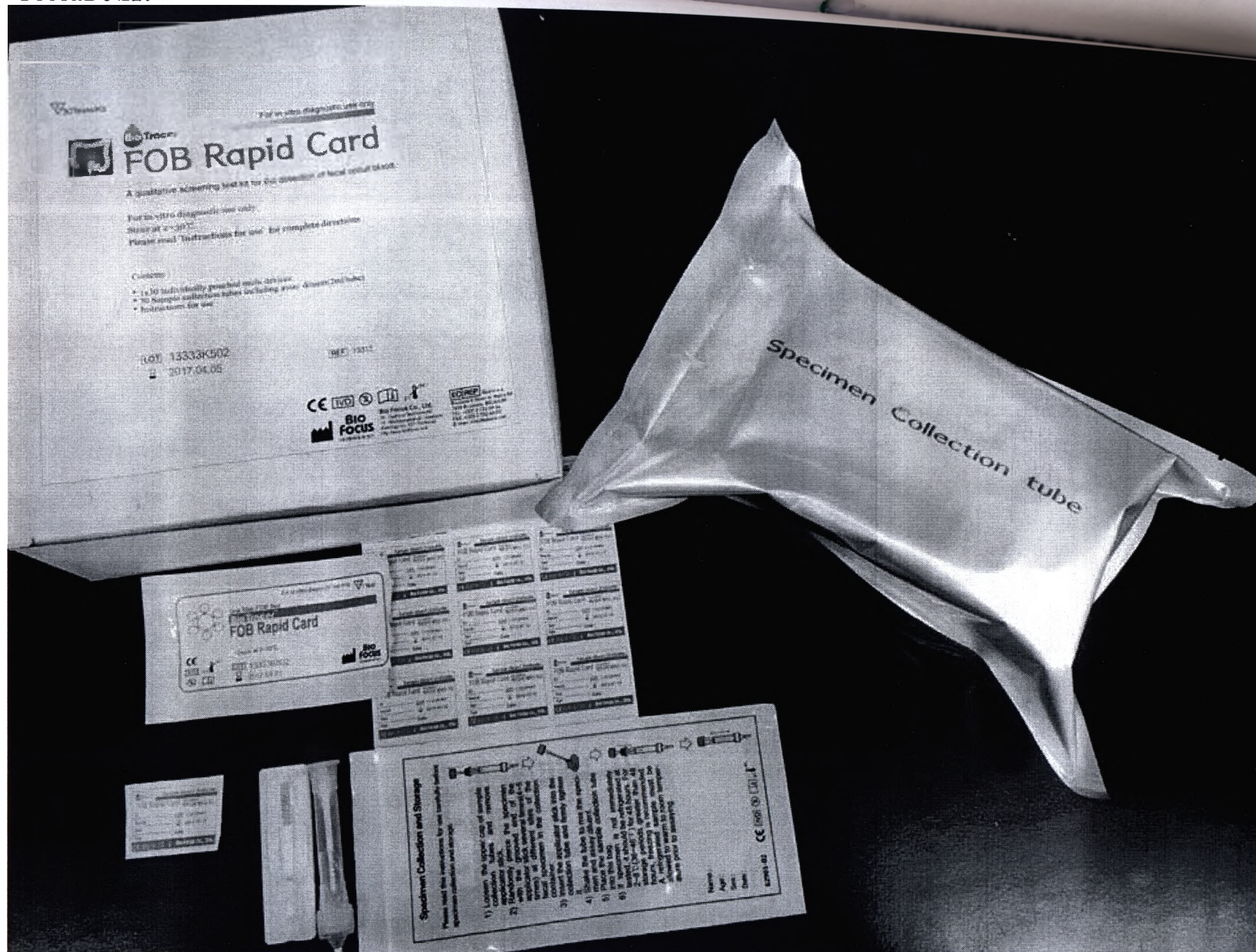

 30 Tests/Kit



BioTracer

For in vitro diagnostic use only

FOB Rapid Card

A qualitative screening test kit for the detection of fecal occult blood.

For in vitro diagnostic use only

Store at 2-30°C

Please read 'Instructions for use' for complete directions


Contents :

- 1x30 individually pouched multi devices
- 30 Sample collection tubes including assay diluent(2ml/tube)
- Instructions for use

LOT 13333K502

8 2017.04.05

REF 13312

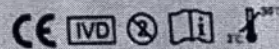


Bio Focus Co., Ltd.
17, Daehyeon Techno-world
19, Oryongginsung-gil, Ulsan-si
Gyeongsang-do, 437-753 Korea
<http://www.biofocus.co.kr>




EC REP Dbelec s.a.
Boulevard Generali Wania 53
1030 Brussels, BELGIUM
TEL. +32(2) 732.59.54
FAX +32(2) 732.60.63
E-mail: mail@dbelec.net

Коробка упаковочная: в открыто состоянии



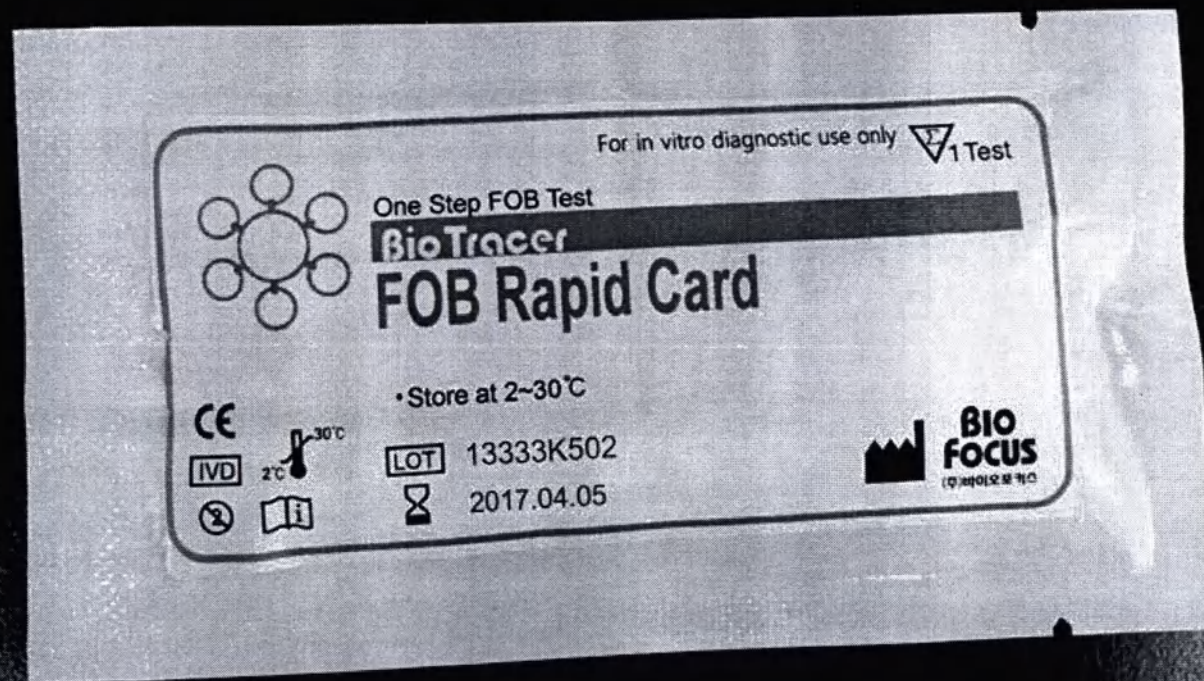


Тест-кассета: без упаковки

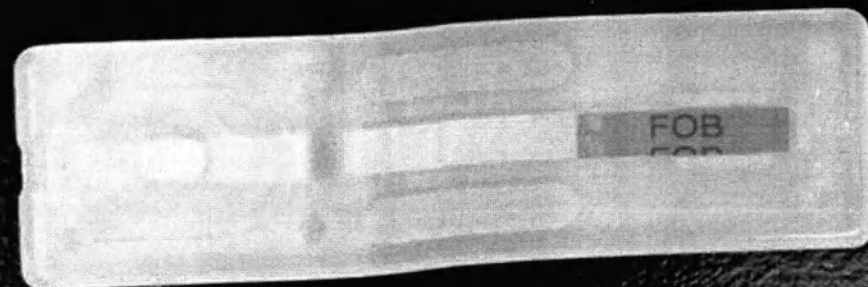


Пробирка с крышкой-капельницей и стержнем для забора
образца: в упаковке



Пробирка с крышкой-капельницей
образца: в упаковке

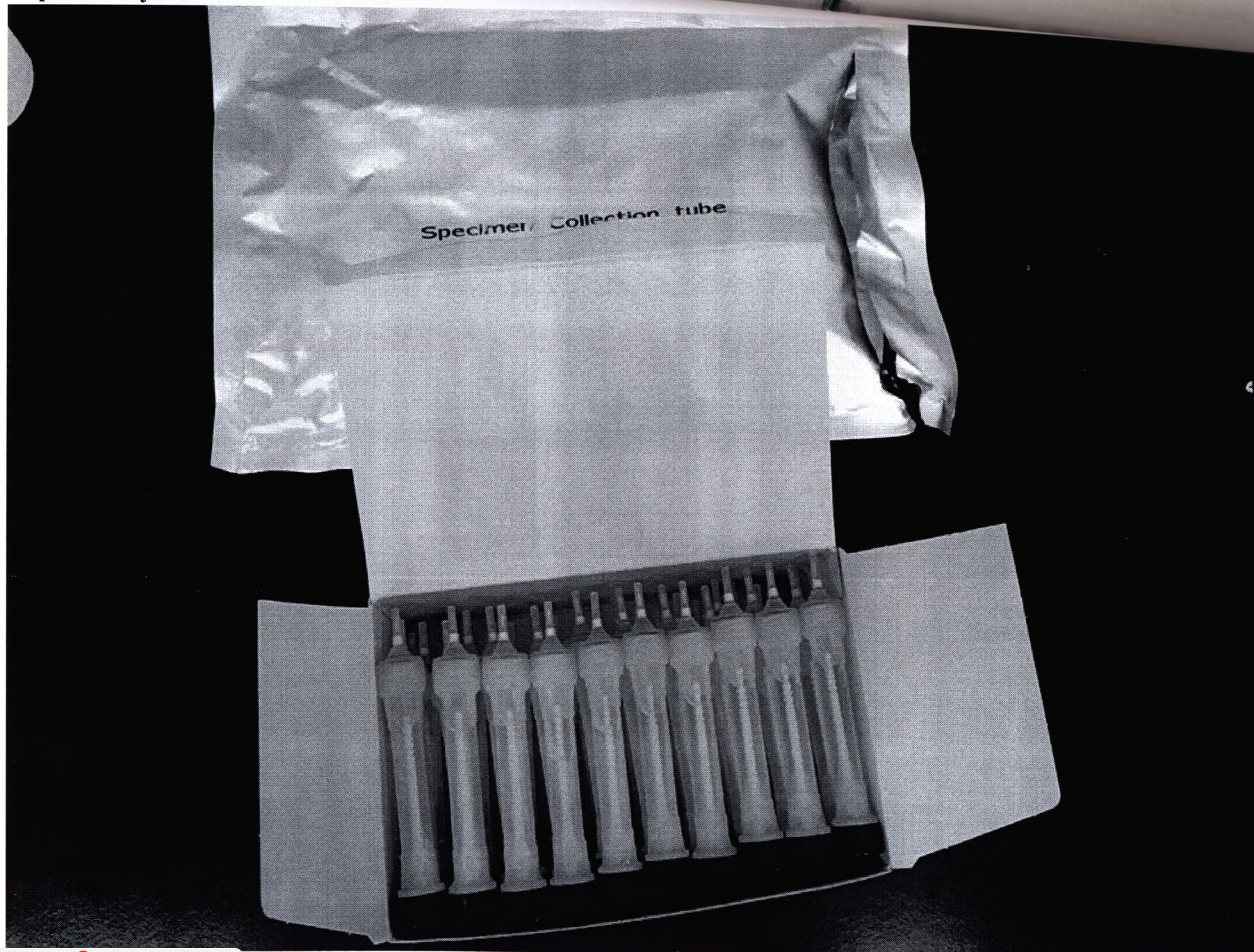

Пробирка с крышкой-капельницей
образца: без упаковки

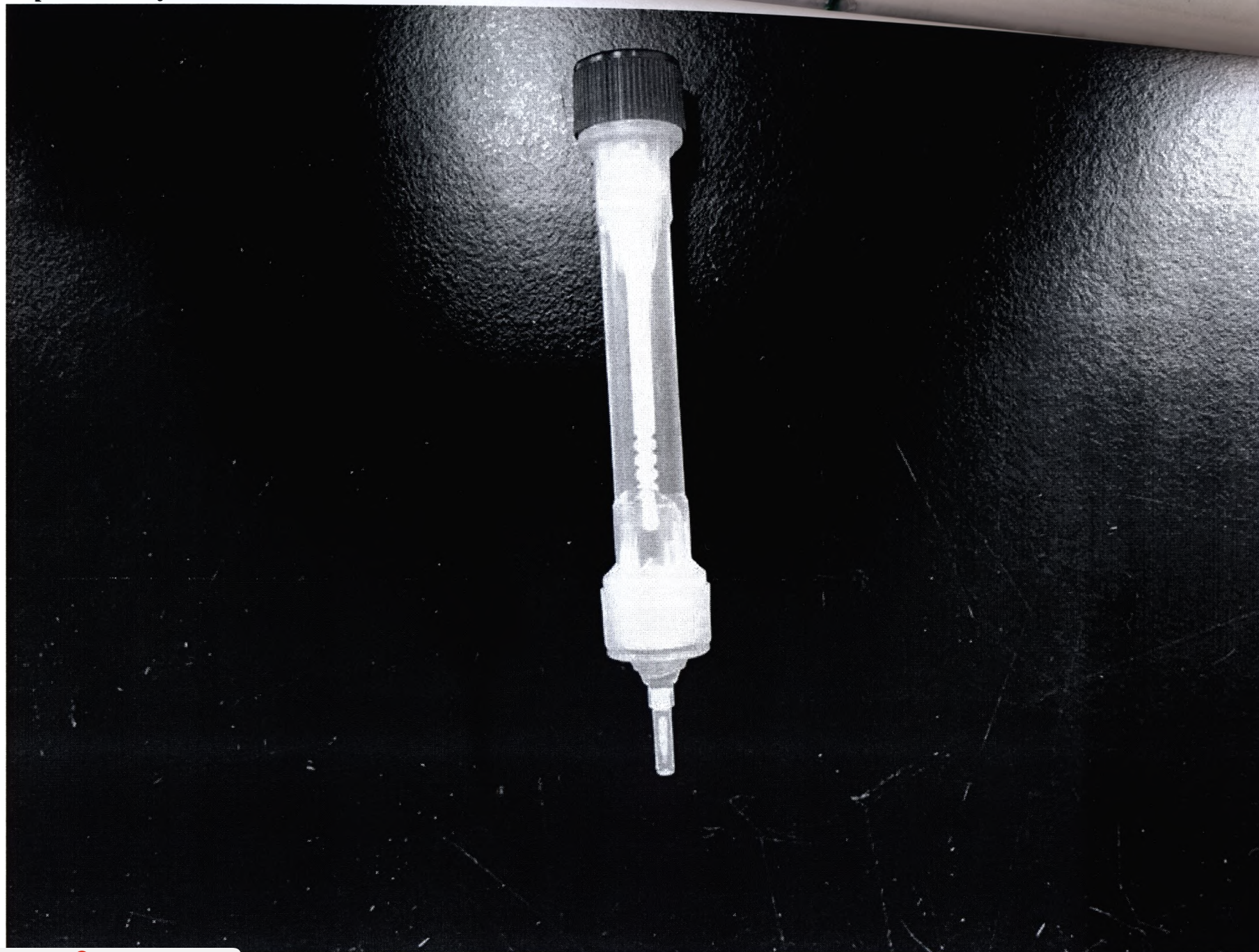

Specimen Collection and Storage

Please read this instructions for use carefully before specimen collection and storage.

- 1) Loosen the upper cap of sample collection tubes and remove applicator stick.
- 2) Randomly pierce the specimen with the grooved end of the applicator stick several times (4-5 times) at different sites of the fecal specimen in the collection container.
- 3) Insert the applicator stick into the collection tube and firmly tighten it.
- 4) Shake the tube to mix the specimen and assay diluent.
- 5) Place the sample collection tube into this bag.
- 6) If specimen is not immediately tested, it should be refrigerated at 2-8°C (36-46°F) for 48 hours. For storage periods greater than 48 hours, freezing is recommended. A refrigerated sample must be allowed to warm to room temperature prior to assaying.



Name :

Age :

Sex :

Date :

62901-02



BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드




ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

BioTracer Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card 바이오트레이서
 에프오비 래피드 카드

ID : _____
 Name: LOT 13333K502
 Sex : 2017.04.05
 Age : _____ Date : _____

CE IVD 3 BIO FOCUS CO., LTD.

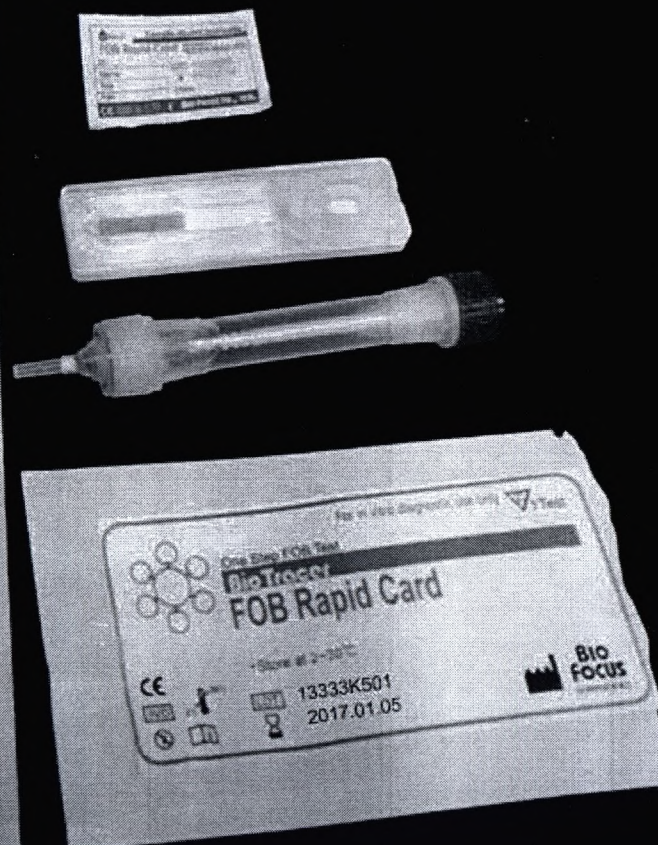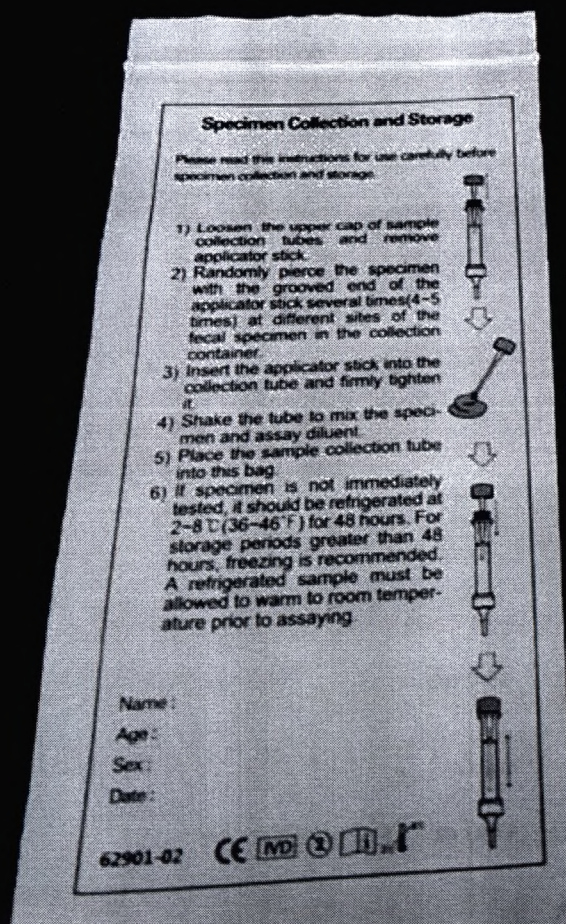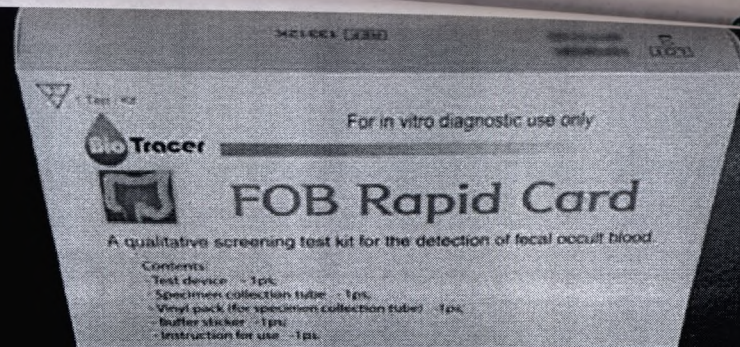

2 Test / Kit



For in vitro diagnostic use only



FOB Rapid Card

A qualitative screening test kit for the detection of fecal occult blood.

For in vitro diagnostic use only


Store at 2~30°C


Please read 'Instructions for use' for complete directions

201501 10000


10000

Коробка упаковочная: в открытом состоянии

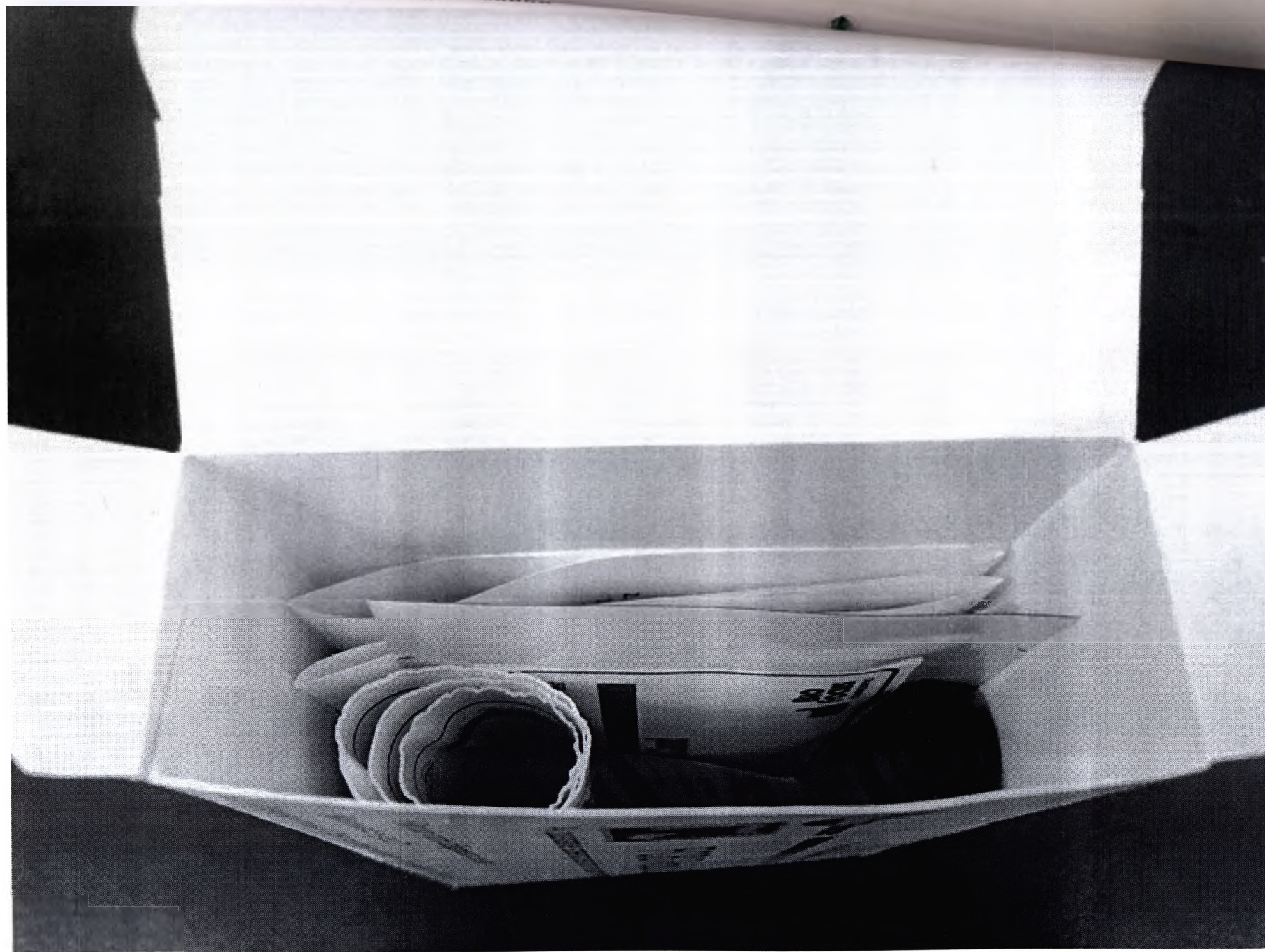


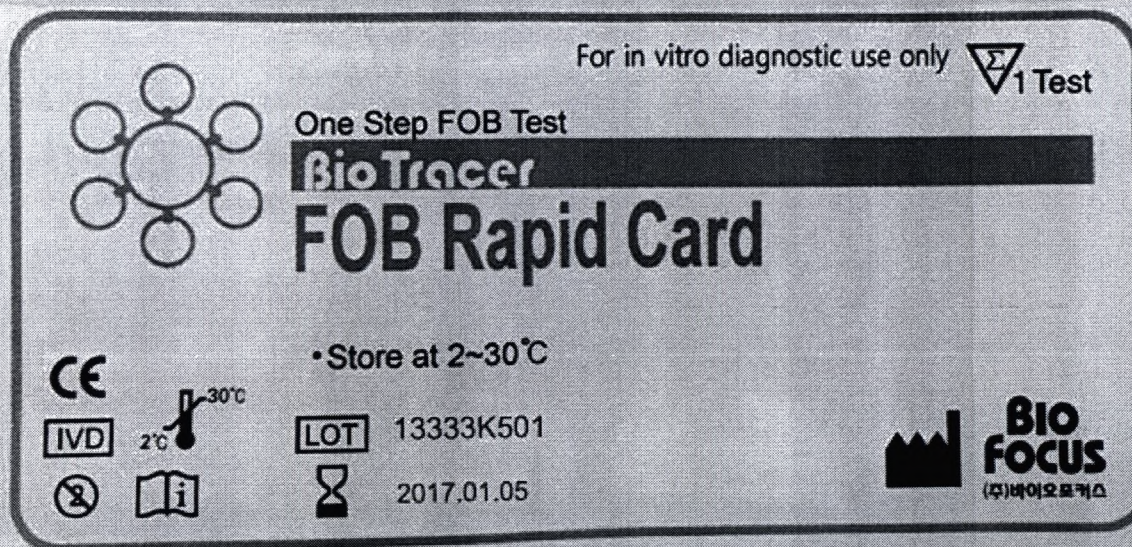

Тест-кассета: без упаковки

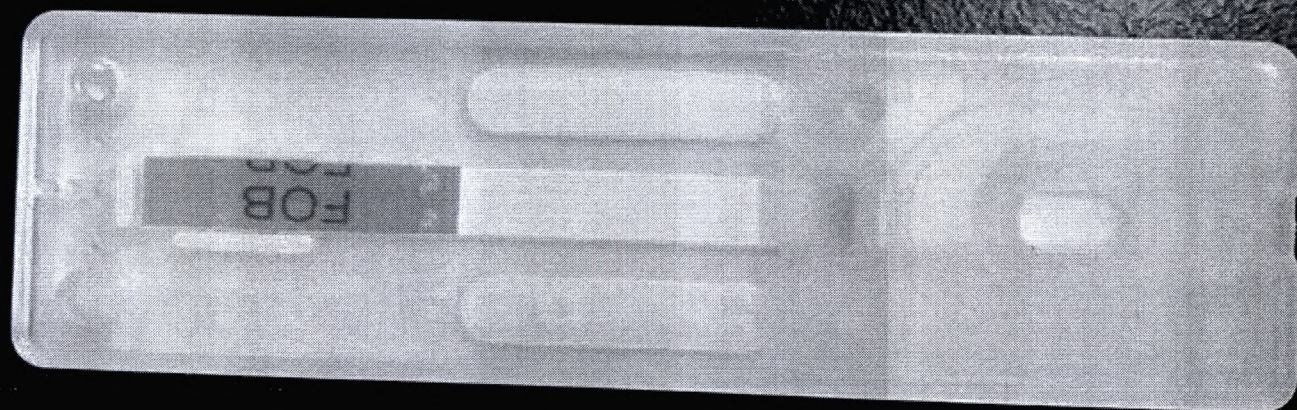

Пробирка с крышкой-капельницей
образца: без упаковки

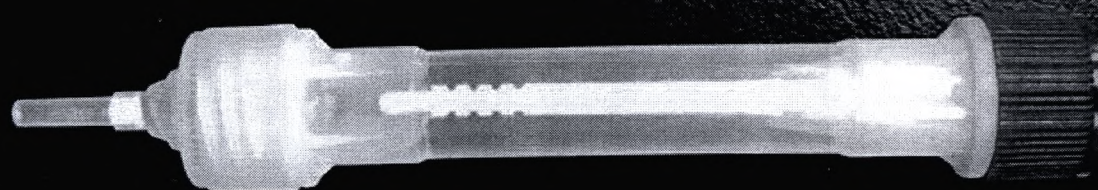

82

Specimen Collection and Storage

Please read this instructions for use carefully before specimen collection and storage.

- 1) Loosen the upper cap of sample collection tubes and remove applicator stick.
- 2) Randomly pierce the specimen with the grooved end of the applicator stick several times (4-5 times) at different sites of the fecal specimen in the collection container.
- 3) Insert the applicator stick into the collection tube and firmly tighten it.
- 4) Shake the tube to mix the specimen and assay diluent.
- 5) Place the sample collection tube into this bag.
- 6) If specimen is not immediately tested, it should be refrigerated at 2-8 °C (36-46 °F) for 48 hours. For storage periods greater than 48 hours, freezing is recommended. A refrigerated sample must be allowed to warm to room temperature prior to assaying.


Name :

Age :

Sex :

Date :

62901-02

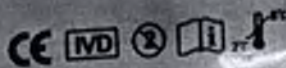

	Sample diluent 2ml/bottle
FOB Rapid Card	
ID :	LOT 13333K501
Name:	2017.01.05
Sex :	
Age :	Date :
CE   Bio focus co., LTD.	