

State of Minnesota

КОПИЯ

SECRETARY OF STATE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This Public Document: Instructions for Use (IFU) for 3M ESPE Clinpro

2. has been signed by Lori J Sheetz

3. acting in the capacity of Notary Public, State of Minnesota

4. bears the seal/stamp of Lori J Sheetz, Notary Public, State of Minnesota

CERTIFIED

5. at: St. Paul, Minnesota

6. Date: March 22, 2017

7. by: Secretary of State, State of Minnesota

8. File No: 9419642-12

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Steve Simon

Steve Simon
Secretary of State



3M ESPE
Dental Products

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000

To Whom It May Concern:

In my capacity as Regulatory Affairs Specialist, 3M ESPE Dental Products, St. Paul, MN, USA, **I certify that the attached English version of the Instructions for Use (IFU) for 3M ESPE Clinpro™ XT Varnish intended for Russia, is truthful and accurate.**


Shari L. Myszka
Shari L. Myszka, R.Ph. (Pharm.D.)
Regulatory Affairs Specialist
3M ESPE Dental Products

March 20, 2017
Date

STATE OF MINNESOTA)
COUNTY OF RAMSEY) ss

On March 20, 2017, before me, a Notary Public within and for said county, personally appeared Shari L. Myszka, known by me to be the person described in and who executed the foregoing instrument and acknowledged that she executed the same as her own free act and deed.

Lori J. Sheetz
Lori J. Sheetz, Notary Public
My Commission Expires, January 31, 2020

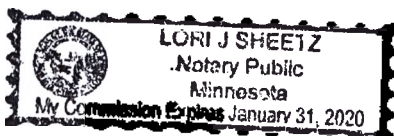

General Information

3M™ ESPE™ Clinpro™ XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating is a site- specific, protective coating for enamel and dentin tooth surfaces. It is a light-cured glass ionomer material in a two-part liquid/paste system. The liquid/paste materials are contained in the 3M™ ESPE™ Clicker™ Dispensing System. This dispensing system provides simultaneous dispensing of each component for a consistent mix. The paste contains a radiopaque fluoro-aluminosilicate glass. The liquid contains a modified polyalkenoic acid. Clinpro XT varnish provides the major benefits of glass ionomer materials including adhesion to tooth structure and sustained fluoride and calcium phosphate release. Clinpro XT varnish offers a combination of a prolonged working time with a short set time achieved by light curing.

Indications

- Protective coating for treatment of tooth sensitivity caused by exposed root surfaces
- Site specific protective coating for high risk, caries prone areas (e.g. around orthodontic brackets, non-cavitated lesions, acid erosion prone surfaces)
- Temporary protective coating for immature enamel (e.g. newly erupting molars)

Contraindications

- Not intended as a replacement for long-term conventional sealants
- Not to be used under orthodontic brackets
- Not to be used in patients with dry mouth (e.g. patients who may awaken with a dry mouth due to open-mouth breathing)

Precautionary Information for Patients

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies. If prolonged contact of uncured material with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use of the product.

Precautionary Information for Dental Personnel

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If product contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then re-glove. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.

3M ESPE MSDS information can be obtained from www.3MESPE.com or contact your local subsidiary.

Instructions for Use

Preparation for Exposed Root Surface Sensitivity Applications

1. Thoroughly clean tooth surface(s) to remove plaque and debris. Rinse thoroughly with water.

Note: Do not use any cleaning medium that may contain oils.

2. Remove pooled water and saliva, but leave tooth slightly moist.
3. Avoid water and saliva contamination during application of this material.

Preparation for site specific tooth surface coating applications; around orthodontic brackets, newly erupting teeth, non-cavitated lesions, and acid erosion prone surfaces

Note: This product is to be used after the orthodontic bracket is light cured or allowed to completely self cure. It is not to be used under or prior to orthodontic bracket placement.

1. Thoroughly clean tooth surface(s) to remove plaque and debris. Rinse thoroughly with water.

Note: Do not use any cleaning medium that may contain oils.

2. Remove pooled water and saliva, but leave tooth slightly moist.
3. Avoid water and saliva contamination during application of this material.
4. Apply a generous amount of 35% phosphoric acid etchant to the enamel surface ensuring entire area is etched.
5. Etch for a minimum of 15 seconds, but no longer than 60 seconds.
6. Thoroughly rinse teeth with air/water spray to remove etchant.
7. Optional: For etch verification, the dry etched surface should appear matte and frosty.

Dispensing

1. Remove cap from the Clicker dispenser by holding down the cap lever and sliding the cap off of the dispenser.
2. Dispense a small amount of material onto a mix pad to ensure even dispensing of both pastes. Discard this material.
3. Fully depress the lever of the Clicker dispenser to dispense "1 click" of the varnish on to the mix pad. Release lever when paste stops extruding (1-2 seconds). Repeat dispensing process for additional material.
4. Wipe the dispenser tips clean with alcohol-dampened gauze.
5. Replace protective cap immediately after dispensing. Hold the sides of the Clicker dispenser cartridge and slide cap into place until securely latched as indicated by the audible "click."
- Do not depress the lever of the Clicker dispenser during cap removal and/or replacement.
- Do not advance the dispenser plunger during cap removal and/or replacement.
- An approximate number of Clinpro XT coating applications remaining in the Clicker Dispensing System are indicated on the underside of the plunger adjacent to the black arrow on the cartridge.

Mixing

1. Using a small spatula, mix paste/liquid components together rapidly (10-15 seconds). The mixed material should have a smooth consistency and glossy appearance.
2. To minimize water evaporation and maximize working time, confine mixing of the paste/liquid to a small area on the mixing pad, about one inch (2.5 cm) in diameter.

Application

Note: Avoid water and saliva contamination during application.

1. Apply a thin layer (1/2mm or less) of the mixed material to the tooth surface using a ball applicator, brush, or other suitable instrument. **Note:** Avoid prolonged contact of uncured material with soft tissues. If accidental contact occurs, immediately wipe off with wet cotton roll.
2. This product has a minimum working time of 2 minutes 30 seconds at a room temperature of about 73°F (23°C). Higher temperatures will shorten working time.

Light Curing

1. Light cure material by exposing layers of 1/2mm or less for 20 seconds to a 3M ESPE curing light, or other curing unit of comparable intensity.
2. **The delayed** auto-setting mechanism of this material will ensure an eventual cure of material shielded from light polymerization such as undercut areas.
3. Trim any ledges or overhangs with a blade or bur. If necessary, the coating can be removed with the use of a coarse prophylactic paste or pumice.

Storage, use and shelf life

This material is light sensitive. Protect from ambient light exposure by dispensing just prior to use and replacing Clicker dispenser cap immediately after dispensing.

Do not store materials in proximity to eugenol containing products.

This product is designed for use at room temperature. If stored in cooler, allow product to reach room temperature prior to use. Shelf life at room temperature is 24 months. Ambient temperature routinely higher than 27°C/80°C may reduce shelf life. See outer package for storage and expiration dates. Do not use the product after expiration date.

Disinfect the capped Clicker dispenser using an intermediate level disinfection process (liquid contact) as recommended by the CDC (Center for Disease Control) and endorsed by the ADA (**American Dental Association**). **Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings** - 2003 (Vol 52; No. RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

Conditions of use of medical device:

The medical device should be used only by qualified dental professionals who have experience with similar products. The medical device should be used in specialized premises in accordance with good aseptic technique.

Operating conditions:

This material is light sensitive. Protect from ambient light exposure by dispensing just prior to use and replacing Clicker dispenser cap immediately after dispensing. Do not store materials in proximity to eugenol containing products.

Storage conditions:

This product is designed for use at room temperature. If stored in cooler, allow product to reach room temperature prior to use. Shelf life at room temperature is 24 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F may reduce shelf life. See outer package for storage and expiration dates.

This medical device isn't subject to maintenance and repair.

Transportation conditions:

Shelf life of the products is guaranteed as labeled, if stored according to the recommended storage conditions. During transportation the products may experience short term temperature variations without affecting product safety and performance. Transportation of medical device is carried out by all type of transport.

Disposal methods:

Dispose of contents/container in accordance with the local/regional/national/ international regulations.

Composition

Paste A

Methacrylates, Water, Silanized glass, substituted amino benzoate

Paste B

Methacrylates, Water, Calcium Glycerophosphate, camphoroquinone, iodonium salt, butylated hydroxyl toluene

The dimensions of Clicker dispenser:

Size 198,12±5,1 x 25,4±1,3 x 35±5,1 mm

Customer Information

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture.

3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the products for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Authorised representative of the manufacturer in RF

ZAO "3M Russia", Russia 121614, Moscow, Krylatskaya str. Bldg. 17/3
T +74957847474



Штат Миннесота

СЕКРЕТАРЬ ШТАТА

АПОСТИЛЬ

(в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Соединенные Штаты Америки

Настоящий официальный документ: инструкция по применению изделия «Материал стоматологический с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro XT Varnish в наборе»

2. подписан Лори Дж. Шитц

3. действующим(-ей) в качестве нотариуса штата Миннесота

4. скреплен печатью/штампом Лори Дж. Шитц, нотариуса штата Миннесота

УДОСТОВЕРЕНО

5. в г. Сент-Пол, шт. Миннесота 6. Дата: 22 марта 2017 г.

7. секретарем штата Миннесота 8. за номером 9419642-12

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

(Печать)

(Подпись)

Большая печать
штата Миннесота

Стив Саймон
Секретарь штата

3M

Для предъявления по месту требования:

Я, специалист по нормативно-правовому регулированию компании «3М ЭСПЭ Дентал Продактс», Сент-Пол, Миннесота, США, свидетельствую, что прилагаемая английская версия инструкции по применению медицинского изделия «Материал стоматологический с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro XT Varnish в наборе», предназначенной для России, является верной и точной.

(Подпись)

20 марта 2017 г.

Шари Л. Мисзка, лицензированный фармацевт, доктор
фармацевтических наук

Дата

Специалист по нормативно-правовому регулированию
«3М ЭСПЭ Дентал Продактс»

ШТАТ МИННЕСОТА)
ОКРУГ РАМСИ)

20 марта 2017 г. ко мне, нотариусу вышеуказанного округа, лично обратился Шари Л. Мисзка, известный мне как лицо, указанное в прилагаемом документе и подписавшее его, а также подтвердивший, что он подписал его, действуя добровольно и в официальном качестве.

(Подпись)

Лори Дж. Шитц, нотариус
Срок моих полномочий истекает
31 января 2020 г.

(Штамп)

ЛОРИ ДЖ. ШИТЦ
Нотариус

Штат Миннесота

Срок моих полномочий истекает 31 января 2020 г.

Общая информация

Материал стоматологический с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro XT Varnish – это защитное покрытие для локального нанесения на поверхности эмали и дентина зуба. Оно представляет собой светополимеризуемый стеклоиономерный материал в двухкомпонентной системе жидкость/паста. Материалы «жидкость-паста» содержатся в дозаторе Clicker, который обеспечивает одновременное дозирование всех компонентов для получения смеси нужной консистенции. Паста содержит рентгеноконтрастное фтор-алюмосиликатное стекло. Жидкость содержит модифицированную полиалкеновую кислоту. Изделие Clinpro XT Varnish обладает основными преимуществами стеклоиономерных материалов, включая сцепление со структурой зуба и непрерывное выделение фтора и фосфата кальция. Clinpro XT Varnish – это сочетание продолжительного времени действия и короткого времени отверждения, достигаемого за счет полимеризации светом.

Показания

- Защитное покрытие для снятия чувствительности оголенного участка корня
- Защитное покрытие для локального нанесения на участки повышенного риска, подверженные кариесу (например, область вокруг ортодонтических конструкций, меловые пятна без признаков наличия кариозной полости, зоны, подверженные кислотной эрозии)
- Временное защитное покрытие для несформировавшейся эмали (например, прорезавшиеся коренные зубы)

Противопоказания

- Не предназначен для замены обычных герметизаторов, устанавливаемых на долгий срок
- Не предназначен для нанесения под ортодонтическими конструкциями
- Не предназначен для использования, если пациент страдает сухостью ротовой полости (например, если пациент может проснуться с сухостью во рту по причине ротового дыхания)

Меры предосторожности для пациентов

Данное изделие содержит вещества, которые при попадании на кожу могут вызывать у отдельных пациентов аллергические реакции. Следует избегать использования данных изделий на пациентах с аллергией на акрилат. В случае длительного контакта с мягкими тканями ротовой полости следует промыть их обильным количеством воды. В случае аллергической реакции, по необходимости, следует обратиться к врачу, удалить изделие, если это необходимо, и прекратить его последующее применение.

Меры предосторожности для стоматологического персонала

Данное изделие содержит вещества, которые при попадании на кожу могут вызывать у отдельных пациентов аллергические реакции. Для снижения риска аллергии контакт с этими материалами следует свести к минимуму. В частности, нужно избегать контактов с неполимеризованным. В случае попадания изделия на кожу необходимо незамедлительно промыть ее водой с мылом. Рекомендуется использовать защитные перчатки и бесконтактную технику. Акрилаты могут проникать сквозь используемые в стоматологической практике перчатки. В случае контакта изделия с материалом перчатки, необходимо снять и выбросить перчатку, незамедлительно вымыть руки водой с мылом и надеть другие перчатки. В случае аллергии, по необходимости, следует обратиться к врачу.

Паспорта безопасности на продукцию компании «ЗМ» можно найти на сайте www.3MESPE.com или получить в соответствующем региональном филиале.

Инструкции по применению

Подготовка к нанесению для снятия чувствительности оголенного участка корня

1. Тщательно очистить поверхность зуба(ов) для удаления зубного налета и остатков пищи. Тщательно прополоскать водой. **Примечание:** не использовать чистящие среды, которые могут содержать масла.
2. Удалить скопившуюся воду и слюну, но сохранить зубы немного влажными.
3. Во время применения материала следует избегать попадания воды и слюны.

Подготовка к локальному нанесению на поверхности зубов; область вокруг ортодонтических конструкций, прорезавшиеся зубы, меловые пятна без признаков наличия кариозной полости, зоны, подверженные кислотной эрозии

Примечание: Изделие следует использовать после того, как ортодонтическая конструкция прошла процесс отверждения светом или процесс полного самоотверждения. Изделие не предназначено для нанесения под ортодонтическими конструкциями или до их установки.

1. Тщательно очистить поверхность зуба(ов) для удаления зубного налета и остатки пищи. Тщательно прополоскать водой. **Примечание:** не использовать чистящие среды, которые могут содержать масла.
2. Удалить скопившуюся воду и слюну, но сохранить зубы немного влажными.
3. Во время применения материала следует избегать попадания воды и слюны.
4. Нанести на поверхность эмали обильное количество 35%-ной фосфорной кислоты, чтобы обеспечить протравливание всей поверхности.
5. Производить травление в течение как минимум 15 секунд, но не дольше 60 секунд.
6. Тщательно прополоскать зубы водно-жидкостным оросителем для удаления травителя.
7. По выбору стоматолога: в подтверждение протравливания сухая протравленная поверхность должна стать матовой.

Дозирование

1. Снять с дозатора колпачок, удерживая рычажок колпачка внизу.
2. Выдавить небольшое количество материала на блокнот для смешивания, чтобы обеспечить равномерное дозирование обеих паст. Утилизировать этот материал.
3. Полностью прижать рычажок дозатора Clicker, чтобы выдавить 1 дозу материала на блокнот для смешивания. Отпустить рычажок после прекращения поступления пасты (1-2 секунды). Для получения дополнительного материала повторите процесс дозирования.
4. Протереть наконечники дозатора марлевой салфеткой, смоченной спиртом.
5. Установить колпачок на место сразу после дозирования. Придерживая картридж дозатора по бокам, надеть колпачок так, чтобы он был надежно зафиксирован, о чем даст знать характерный щелчок.
- Не отпускать надавленный рычажок дозатора Clicker при снятии и/или надевании колпачка.
- Не продвигать плунжер дозатора вперед при снятии и/или надевании колпачка.
- Приблизительное количество применений покрытия Clinpro XT, остающегося в дозаторе Clicker, указано на нижней стороне плунжера, рядом с черной стрелкой на картридже.

Смешивание

1. Быстро (10-15 секунд) смешать компоненты с помощью небольшого шпателя. Смешанный материал должен иметь однородную консистенцию и обладать глянцевым блеском.
2. Для минимизации испарения воды и максимизации времени действия следует ограничить смешивание пасты и жидкости на блокноте для смешивания зоной с диаметром около одного дюйма (2,5 см).

Нанесение

Примечание: Во время применения материала следует избегать попадания воды и слюны.

1. Нанести тонкий слой (1/2 мм или менее) смешанного материала на поверхность зуба, пользуясь шариковым аппликатором, кистью или другим пригодным инструментом. **Примечание:** Избегать продолжительного контакта неполимеризованного материала с мягкими тканями. В случае случайного контакта незамедлительно стереть влажным ватным тампоном.
2. Минимальное время действия изделия составляет 2 минуты 30 секунд при комнатной температуре около 73°F (23°C). При более высоких температурах время действия сокращается.

Световая полимеризация

1. Полимеризовать материал светом слоями не более 1/2 мм в течение 20 секунд с помощью светополимеризатора «ЗМ ЭСПЭ» или другого устройства полимеризации совместимой интенсивности.
2. Механизм замедленной самополимеризации материала обеспечивает постепенное отверждение

материала, скрытого от световой полимеризации, например, в зонах поднутрений.

3. Произвести корректировку выступов или нависающих краев при помощи скальпеля или бора. При необходимости покрытие можно удалить с помощью профилактической полировочной пасты или пемзы.

Хранение, применение и срок годности

Данный материал чувствителен к свету. Чтобы защитить его от воздействия окружающего освещения, дозирование следует производить непосредственно перед применением, а сразу после дозирования необходимо закрыть дозатор колпачком.

Запрещается хранить материалы вблизи изделий, содержащих эвгенол.

Изделие разработано для применения при комнатной температуре. В случае хранения в холодильной камере перед использованием следует позволить изделию нагреться до комнатной температуры. При комнатной температуре срок хранения составляет 24 месяца. Хранение изделия при постоянной температуре более 27°C/80°C может сократить срок хранения. См. срок хранения и дату истечения срока годности на упаковке. Не используйте продукт после окончания срока годности.

Для дезинфекции изделия следует применить процесс дезинфекции промежуточного уровня (контакт с жидкостью), рекомендованный Центром по контролю заболеваний (Center for Disease Control) и одобренный Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association). Указания по инфекционному контролю в стоматологических учреждениях, 2003 (том 52, № RR-17), Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Условия использования медицинского изделия:

Данное медицинское изделие предназначено для применения только квалифицированными стоматологами, имеющими опыт использования аналогичных продуктов. Медицинское изделие должно применяться в специализированных помещениях с использованием надлежащего метода стерилизации.

Условия эксплуатации:

Данный материал чувствителен к свету. Чтобы защитить его от воздействия окружающего освещения, дозирование следует производить непосредственно перед применением, а сразу после дозирования необходимо закрыть дозатор колпачком. Запрещается хранить материалы вблизи изделий, содержащих эвгенол.

Условия хранения:

Изделие разработано для применения при комнатной температуре. В случае хранения в холодильной камере перед использованием следует позволить изделию нагреться до комнатной температуры. При комнатной температуре срок хранения составляет 24 месяца. Хранение изделия при постоянной температуре более 27°C/80°C может сократить срок хранения. См. срок хранения и дату истечения срока годности на упаковке.

Данное медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Условия при транспортировке:

Гарантированный срок годности данных изделий соответствует указанному на этикетке при условии хранения в рекомендованных условиях. При транспортировке изделия могут подвергаться кратковременным колебаниям температуры без влияния на их безопасность и эффективность. Транспортировка медицинского изделия может осуществляться любыми видами транспорта.

Методы утилизации:

Утилизируйте содержимое и упаковку в соответствии с применимыми местными, региональными, государственными и международными нормами.

Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с

медицинскими отходами» класс отходов Б).

Состав

Паста А

Метакрилаты, вода, силанизированное стекло, замещенный аминбензоат

Жидкость В

Метакрилаты, вода, глицерофосфат кальция, камфорохинон, иодониевая соль, бутилированный гидроксил толуол

Размеры дозатора Clicker:

Размеры: 198,12±5,1 x 25,4±1,3 x 35±5,1 мм

Информация для клиентов

Предоставление информации, не соответствующей настоящей инструкции, запрещено.

Гарантийные обязательства

Компания «ЗМ ЭСПЭ» гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. «ЗМ ЭСПЭ» НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОРГОВОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности товаров для применения пользователем. В случае обнаружения в изделии дефектов в течение гарантийного срока, исключительным выходом и единственным обязательством «ЗМ ЭСПЭ» является ремонт или замена изделия «ЗМ ЭСПЭ».

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания «ЗМ ЭСПЭ» не несет никакой ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данной продукции, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежности или объективной ответственности.

Уполномоченный

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ЗАО «ЗМ Россия», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17/3

Тел.: +74957847474



Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепневым Виктором Игоревичем

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Тридцать первого августа две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнева Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 9-39019

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ---- руб.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Акимова Г.Б

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 12 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Тридцать первого августа две тысячи семнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 9-39020

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 120 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: _____
руб. 00 коп.



Г.Б. Акимов

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 12 лист(а) (о в)

Нотариус