

«Утверждаю»

Член правления
Лиепайской специальной экономической зоны

ООО «НордеПласт»

Р.Грамико



М.П. (подпись)

20 апреля 2017 года

Инструкция по применению
Медицинского изделия
Пластырь медицинский фиксирующий

Содержание

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Область и способ применения медицинского изделия	3
3. Показания для применения медицинского изделия	4
4. Противопоказания для применения медицинского изделия	4
5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.....	4
6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.....	4
7. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.....	4
8. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания.....	4
9. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами	5
10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).....	5
11. Условия хранения и транспортировки.....	5
12. Указание на необходимость хранения медицинского изделия в местах, недоступных для детей	5
13. Сведения о производителе медицинского изделия	6
14. Варианты комплектации медицинского изделия.....	6
15. Маркировка.....	6
16. Технические характеристики, общая схема изделия, характеристики применяемых расходных материалов.....	7
17. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.....	17
18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения	18
19. Гарантии.....	18

1. Наименование медицинского изделия

Пластырь медицинский фиксирующий, в следующих исполнениях:

- Пластырь медицинский фиксирующий тканый, следующих типоразмеров: 1 см х 3 м; 1 см х 5 м; 1,25 см х 5 м; 2 см х 3 м; 2 см х 5 м; 2,5 см х 5 м; 3 см х 3 м; 3 см х 5 м; 4 см х 5 м; 5 см х 5 м; 1,25 см х 9,14 м; 2,5 см х 9,14 м; 5 см х 9,14 м.
- Пластырь медицинский фиксирующий текстильный, следующих типоразмеров: 1,25 см х 5 м, 2,5 см х 5 м, 5 см х 5 м, 1,25 см х 9,14 м, 2,5 см х 9,14 м, 5 см х 9,14 м.
- Пластырь медицинский фиксирующий полимерный, следующих типоразмеров: 1,25 см х 5 м, 2,5 см х 5 м, 5 см х 5 м, 1,25 см х 9,14 м, 2,5 см х 9,14 м, 5 см х 9,14 м.
- Пластырь медицинский фиксирующий нетканый, следующих типоразмеров: 1,25 см х 5 м, 2,5 см х 5 м, 5 см х 5 м, 1,25 см х 9,14 м, 2,5 см х 9,14 м, 5 см х 9,14 м.
- Пластырь медицинский фиксирующий рулонный нетканый, следующих типоразмеров: 5 см х 10 м, 10 см х 10 м, 15 см х 10 м, 20 см х 10 м, 10 см х 2 м, 15 см х 2 м.

2. Область и способ применения медицинского изделия

Медицинское изделие «Пластырь медицинский фиксирующий» можно использовать в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в домашних условиях.

Данное медицинское изделие выпускается в нестерильном виде.

Очистить и высушить предполагаемую поверхность для крепления пластыря.

Извлечь пластырь из упаковки, отделить нужную длину, наклеить пластырь на чистую сухую здоровую поверхность кожи и фиксируемый предмет. В варианте исполнения «Пластырь медицинский фиксирующий рулонный» удалить защитную бумагу перед фиксацией на коже. Края пластыря зафиксировать, не допускать возникновения складок.

Удаление пластыря: приподнимите пластырь с любого края и аккуратно снимите его.

Менять согласно рекомендации лечащего врача. При появлении воспаления участка кожи, находящейся в контакте с пластырем, желательно обратиться к лечащему

врачу. В случае проявления аллергии – появления зуда, покраснения, немедленно удалите пластырь.

3. Показания для применения медицинского изделия

Пластырь медицинский фиксирующий используется для фиксации послеоперационных раневых повязок, марлевых и впитывающих прокладок, катетеров и дренажных трубок, игл, зондов и прочих медицинских изделий.

4. Противопоказания для применения медицинского изделия

Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Не использовать повторно.

6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

При применении пластырей согласно инструкции не выявлено побочных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан и медицинских работников. При индивидуальной непереносимости компонентов пластыря возможно появление воспаления поврежденного участка кожи; в случае появления зуда, покраснения кожи следует немедленно удалить пластырь. Желательно обратиться к врачу.

7. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Пластырь не оказывает влияния на другие медицинские изделия при совместном использовании.

8. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания

Возможно применение пластырей для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, за исключением наличия индивидуальной непереносимости компонентов медицинского изделия.

9. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Медицинское изделие не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами.

10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)

Срок годности медицинского изделия – 5 лет с даты изготовления. Запрещено использование пластыря после окончания срока годности.

11. Условия хранения и транспортировки

Хранить вдали от источников света и тепла, в сухом и чистом месте, при температуре 5 - 30°C, при относительной влажности не более 80%.

Пластыри могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта, при температуре 5 – 30°C, при относительной влажности не более 80%, вдали от источников света и тепла, в сухом и чистом месте.

12. Указание на необходимость хранения медицинского изделия в местах, недоступных для детей

Медицинское изделие не представляет прямой угрозы и не нуждается в специальном хранении вдали от детей, за исключением лиц, имеющих особую индивидуальную аллергическую реакцию при контактировании с отдельными (к примеру, акриловый клей или текстильные синтетические ткани) компонентами, которые присутствуют в составе изделия.

13. Сведения о производителе медицинского изделия

Наименование (полное и сокращенное): Лиепайская специальная экономическая зона общество с ограниченной ответственностью «НордеПласт», Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт»

Юридический адрес: Латвийская Республика, г. Лиепая, LV-3405, ул. Зиемелю 19

Почтовый адрес: Латвийская Республика, г. Лиепая, LV-3405

Телефон: +(371)20037773

Адрес места производства: Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвийская республика, г. Лиепая, LV-3405, ул. Зиемелю 19

14. Варианты комплектации медицинского изделия

В комплект поставки входят:

- пластырь одного варианта исполнения и размера в потребительской упаковке с маркировкой

или

- пластыри одного варианта исполнения и размера в потребительских упаковках или без них, уложенные в групповую упаковку с маркировкой

- инструкция по применению.

15. Маркировка

В маркировке, нанесенной на наружную сторону индивидуальной упаковки, указано:

- наименование изделия, включая вариант исполнения
- размер пластыря
- торговая марка EcoPlast® (при наличии);
- логотип производителя NordePlast;
- наименование, адрес и телефон производителя
- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя
- дата выпуска
- срок годности
- серия (LOT)
- маркировка CE
- знак соответствия
- маркировка EAC
- код переработки 21 PAP (бумага)
- температурный диапазон хранения
- знак «однократного использования»

- маркировка "Grüne Punkt" («Экологическая упаковка»)
- штрих-код
- номер и дата регистрационного удостоверения
- условия утилизации
- надпись «нестерильно»

В маркировке, нанесенной на наружную сторону групповой упаковки, указано:

- наименование изделия, включая вариант исполнения
- размер пластыря
- количество (в групповой упаковке)
- логотип производителя NordePlast
- торговая марка EcoPlast® (при наличии);
- наименование производителя
- юридический адрес производства
- адрес места производства
- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя
- дата выпуска
- срок годности
- серия (LOT)
- маркировка CE
- знак соответствия
- маркировка EAC
- код переработки 21 PAP (бумага)
- температурный диапазон хранения
- знак «однократного использования»
- маркировка "Grüne Punkt" («Экологическая упаковка»)
- штрих-код
- краткое описание и назначение медицинского изделия
- рекламное изображение изделия
- способ применения
- описание утилизации
- номер и дата регистрационного удостоверения
- знак «нестерильно»
- противопоказания

16. Технические характеристики, общая схема изделия, характеристики применяемых расходных материалов

Пластырь медицинский фиксирующий тканый, следующих типоразмеров:

1 см x 3 м, 1 см x 5 м, 1,25 см x 5 м, 2 см x 3 м, 2 см x 5 м, 2,5 см x 5 м, 3 см x 3 м, 3 см x 5 м, 4 см x 5 м, 5 см x 5 м, 1,25 см x 9,14 м, 2,5 см x 9,14 м, 5 см x 9,14 м.

1. Подложка – 100% хлопок NTF C4342, производитель: Nantong Flexitex Co., Ltd (КНР) или 100% хлопок NTF C4342, производитель: Nantong Flexitex Co., Ltd (КНР)

с бежевым красителем REMAFIN. BROWN PE82330656-ZN, производитель красителя: Clariant Masterbatch GmbH (Германия).

2. Клей R/ZnO Adhesive – Zinc Oxide, производитель: Henkel AG & Co. KG (Германия).

Состав: натуральный каучук – 19,20%, оксид цинка – 13,25%, канифоль камедь – 15,15%, канифоль эфир – 15,15%, керосин – 1,75%, ланолин – 2,05%, антиоксидант – 0,38%, растворитель – *33,07%.

3. Катушка (Сердечник) – цвет белый, материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель: PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC (Турция), или материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd (КНР), или материал: поливинилхлорид PVC, производитель: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd. (КНР).

или Шпуля, материал полипропилен PETOPIEN MH418, производитель: PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC. (Турция), цвета катушки: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов) Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti, производитель красителей: Yapraksan Masterbatch (Турция).

4. Пластмассовый футляр, материал полипропилен PETOPIEN MH418, производитель: PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC. (Турция), цвета: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов) – Yapraksan Masterbatch, производитель красителей: Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti (Турция).

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный, следующих типоразмеров: 1,25 см x 5 м, 2,5 см x 5 м, 5 см x 5 м, 1,25 см x 9,14 м, 2,5 см x 9,14 м, 5 см x 9,14 м.

1. Подложка – полимерная микроперфорированная полупрозрачная плёнка (без марки), производитель RKW Group (Германия).

Состав: линейный полиэтилен низкой плотности LLDPE (60-100%), полиэтилен низкой плотности (высокого давления) ULDPE (<40%).

2. Акриловый клей DURO-TAK® 380-2954, производитель Henkel AG & Co. KGaA. (Германия), состав: винило-акриловая смола – 51%; растворитель: этилацетат, изопропанол, углеводороды C7/C9 – 49%.

3. Катушка (Сердечник) – цвет белый, материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC (Турция), или материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd (КНР), или материал: поливинилхлорид PVC, производитель: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd . (КНР).

или Шпуля, материал: полипропилен PETOPLN MH418, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC.

цвета шпули: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (для всех цветов) Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti, производитель красителей: Yapraksan Masterbatch (Турция).

4. Пластмассовый футляр: материал: полипропилен PETOPLN MH418, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC, цвета: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов) – Yapraksan Masterbatch, производитель красителей: Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti (Турция).

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый, следующих типоразмеров: 1,25 см x 5 м, 2,5 см x 5 м, 5 см x 5 м, 1,25 см x 9,14 м, 2,5 см x 9,14 м, 5 см x 9,14 м.

1. Подложка – натуральная вискоза (без марки), производитель Ahlstrom Corporation (Финляндия) или натуральная вискоза (без марки), производитель Ahlstrom Corporation (Финляндия) с бежевым красителем REMAFIN, BROWN PE82330656-ZN, производитель красителя Clariant Masterbatch GmbH (Германия).

2. Акриловый клей DURO-TAK® 380-2954, производитель Henkel AG & Co. KGaA. (Германия), состав: винило-акриловая смола – 51%, растворитель: этилацетат, изопропанол, углеводороды C7/C9 -- 49%.

3. Катушка (Сердечник) – цвет белый, материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC (Турция) или материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd (КНР) или материал: поливинилхлорид PVC, производитель: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd. (КНР)

или Шпуля, материал: полипропилен PETOPLN MH418, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC, цвета шпули: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный,

розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов) Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti. производитель красителей: Yapraksan Masterbatch (Турция).

4. Пластмассовый футляр:

Материал: полипропилен PETOPLIN MH418, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC.

цвета: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов) – Yapraksan Masterbatch, производитель красителей: Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti (Турция).

Пластырь медицинский фиксирующий рулонный нетканый, следующих типоразмеров: 5 см x 10 м, 10 см x 10 м, 15 см x 10 м, 20 см x 10 м, 10 см x 2 м, 15 см x 2 м.

1. Подложка – натуральная вискоза (без марки), производитель Ahlstrom Corporation (Финляндия)

2. Акриловый клей DURO-TAK® 380-2954, производитель Henkel AG & Co. KGaA. (Германия), состав: винило-акриловая смола – 51%, растворитель: этилацетат, изопропанол, углеводороды C7/C9 – 49%.

3. Антиадгезионный слой -- пергамин, покрытый слоем силикона (полидиметилсилоксан) Clay coated silicone paper (без марки), производитель Rossella S.r.l. (Италия), на одной или обеих сторонах с красителем синего цвета REMAFIN. BROWN PE82330656-ZN. производитель красителя: Clariant Masterbatch GmbH (Германия).

Пластырь медицинский фиксирующий текстильный, следующих типоразмеров: 1,25 см x 5 м, 2,5 см x 5 м, 5 см x 5 м, 1,25 см x 9,14 м, 2,5 см x 9,14 м, 5 см x 9,14 м.

1. Подложка – 100% ацетат Taffeta biesse, производитель Tessitura Antonio ghiringhelli (Италия) или Текстильная синтетическая ткань на основе вискозного ацетатного материала (без марки), производитель Nantong Flexitex Co., Ltd. (КНР)

или 100% ацетат Taffeta biesse, производитель Tessitura Antonio ghiringhelli (Италия) с бежевым красителем REMAFIN. BROWN PE82330656-ZN, производитель красителя: Clariant Masterbatch GmbH (Германия),

или Текстильная синтетическая ткань на основе вискозного ацетатного материала (без марки), производитель Nantong Flexitex Co., Ltd. (КНР) с бежевым

красителем REMAFIN. BROWN PE82330656-ZN, производитель красителя: Clariant Masterbatch GmbH (Германия).

2. Акриловый клей DURO-TAK® 380-2954, производитель Henkel AG & Co. KGaA. (Германия), состав: винило-акриловая смола – 51%, растворитель: этилацетат, изопропанол, углеводороды C7/C9 – 49%.

3. Катушка (Сердечник) – цвет белый, материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC (Турция), или материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd (КНР), или материал: поливинилхлорид PVC, производитель: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd (КНР).

или Шпуля, материал: полипропилен PETOPL EN MH418, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC.


цвета шпули: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов): Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti, производитель красителей: Yapraksan Masterbatch (Турция).

4. Пластмассовый футляр:


Материал: полипропилен PETOPL EN MH418, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC.

цвета: зелёный, салатовый, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный, белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (для всех цветов) – Yapraksan Masterbatch, производитель красителей: Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti (Турция).



Рисунок №1

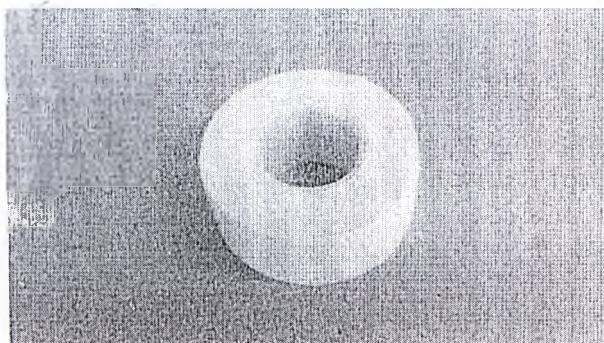



Пластырь медицинский фиксирующий тканый (белый, бежевый)

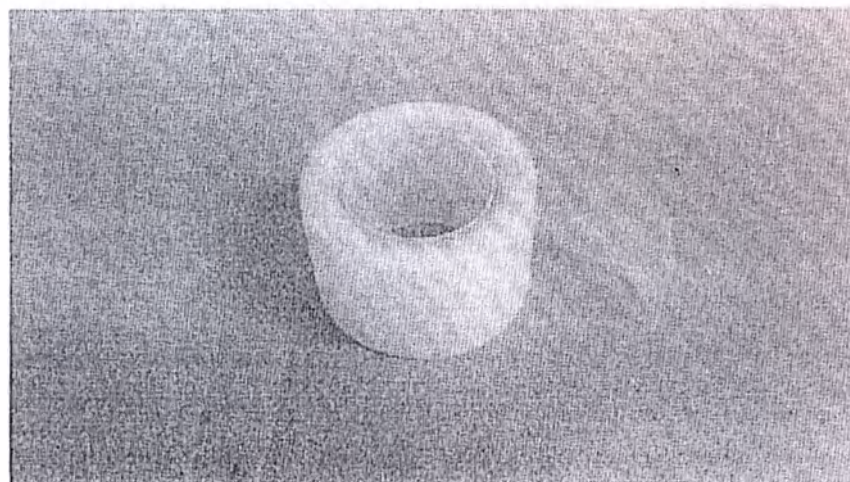


Пластырь медицинский фиксирующий полимерный (белый)

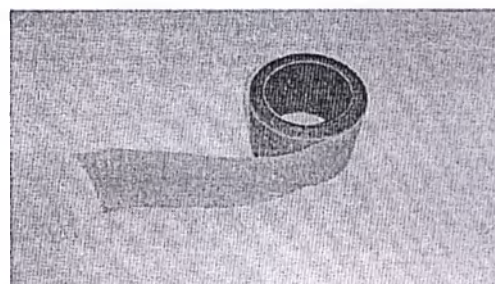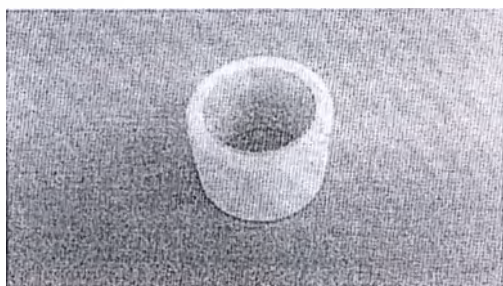

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый (белый, бежевый)

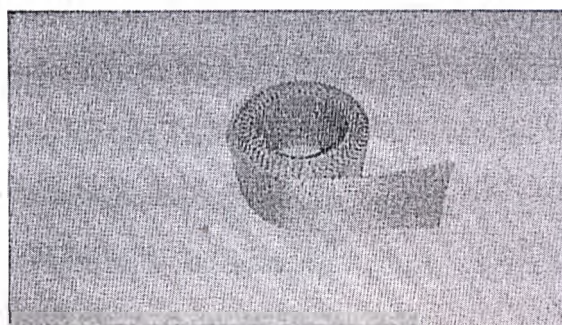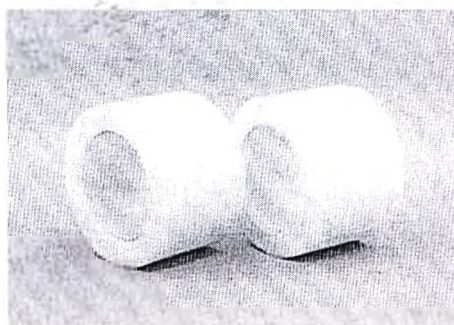

Пластырь медицинский фиксирующий текстильный (белый, бежевый)

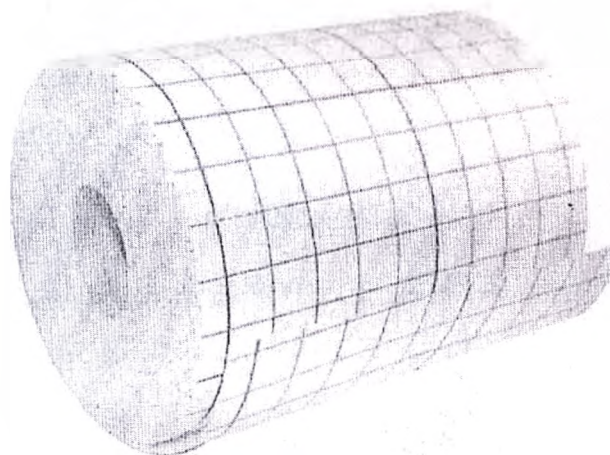

Пластырь медицинский рулонный нетканый (белый)

Катушка:

Катушка (Сердечник) – цвет белый, материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель PLASSAN DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC (Турция), или материал: полиэтилен высокой плотности HDPE, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd (КНР), или материал: поливинилхлорид PVC, производитель: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd. (КНР), цвет белый.

Пластырь медицинский фиксирующий, следующих исполнений:

- тканый,
- нетканый,
- полимерный,
- текстильный

наматывается на сердечник.

Катушка (сердечник), варианты исполнения:

1. Пластырь медицинский фиксирующий тканый наматывается на сердечник:

- высота – 1 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 3 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 1,25 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 4 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 2 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 5 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 2,5 см, диаметр – 27 мм;

2. Пластырь медицинский фиксирующий текстильный. Пластырь медицинский фиксирующий полимерный. Пластырь медицинский фиксирующий нетканый наматывается на сердечник:

- высота – 1,25 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 2,5 см, диаметр – 27 мм;
- высота – 5 см, диаметр – 27 мм.

Допускаемое отклонение от размеров катушки (сердечника) – не более 10%

Шпуля:

Материал: полипропилен PETOPLLEN MH418, производитель PLASSAN
DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN.TIC.

Цвет шпули:

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| • зелёный | • голубой | • красный |
| • салатовый | • фиолетовый | • розовый |
| • желтый | • прозрачный | • оранжевый |
| • синий | • белый | |

Марка красителей (для всех цветов) Yapraksan plastik kimyevi mad. amb. san. ve tic. ltd. Şti, производитель Yapraksan Masterbatch (Турция).

Пластырь медицинский фиксирующий, следующих исполнений:

- | | |
|---------------|---------------|
| • тканый, | • нетканый. |
| • полимерный, | • текстильный |

наматывается на шпулю.

Шпуля, варианты исполнения:

Рисунок №6

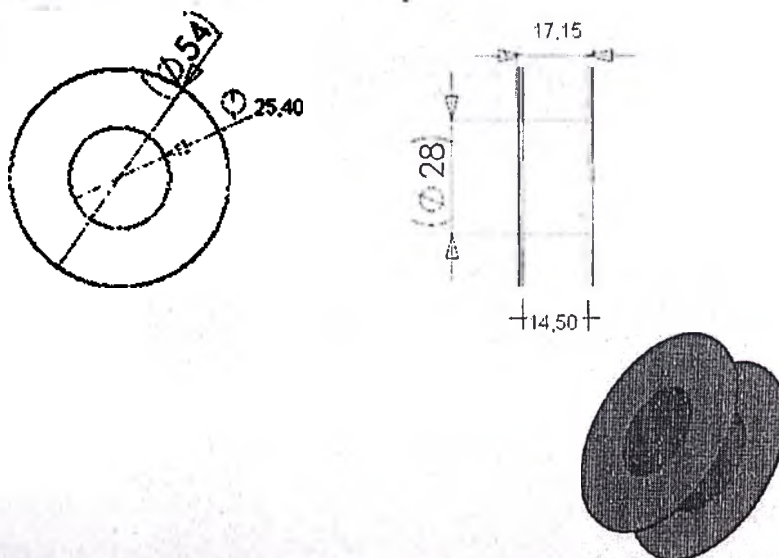


Рисунок №7




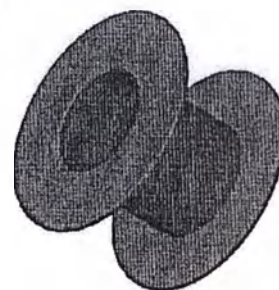


Рисунок №8

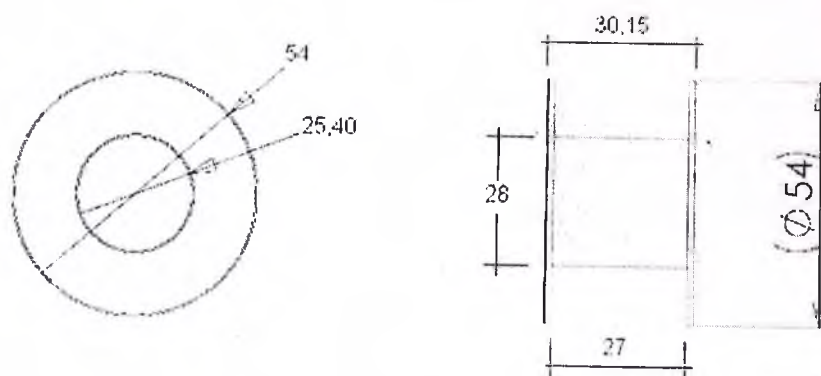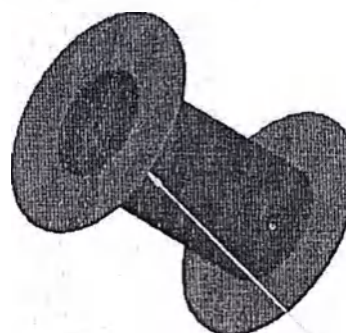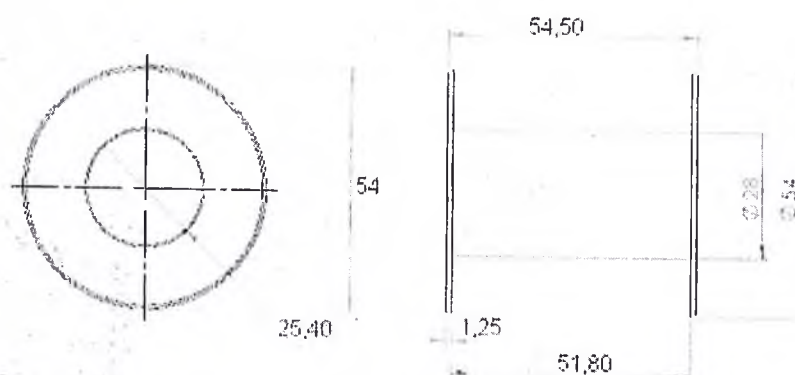

Допускаемое отклонение от размеров шпули – не более 10%

Пластмассовый футляр

Материал: полипропилен PETOPL EN MH418. производитель PLASSAN
DEGIRMEN PLASTIK VE FIRCA SAN. TIC.

цвета: зелёный, салатный, желтый, синий, голубой, фиолетовый, прозрачный,
белый, красный, розовый, оранжевый, марка красителей (общая для всех цветов) –
Yapraksan Masterbatch, производитель красителей: Yapraksan plastik kimyevi mad. amb.
san. ve tic. ltd. Şti (Турция).

Пластырь медицинский фиксирующий, следующих исполнений:

- тканый,
- полимерный,
- нетканый,
- текстильный

наматывается на шпулю и сверху может надеваться пластмассовый футляр.

Пластмассовый футляр – вариант потребительской упаковки медицинского изделия, варианты исполнения:

Рисунок №9

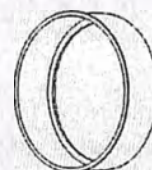
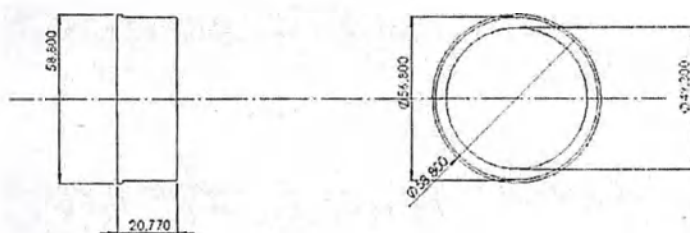


Рисунок №10




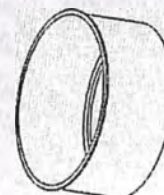


Рисунок №11

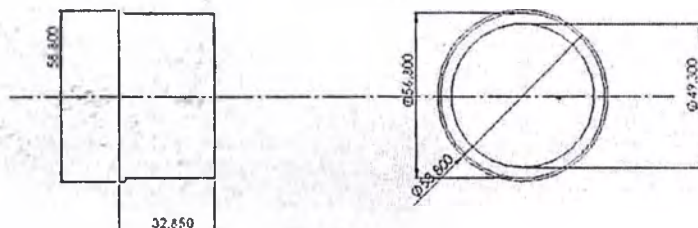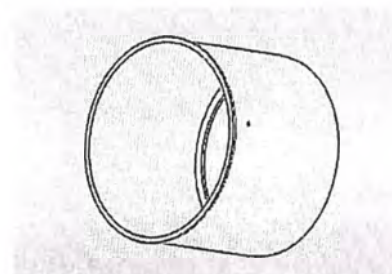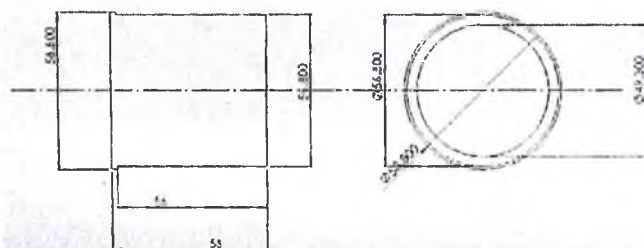

Допускаемое отклонение от размеров пластмассового футляра – не более 10%.

Таблица № 1

	Тканый	Нетканый	Текстильный	Полимерный	Рулонный нетканый
Линейные размеры	1 см x 3 м, 1 см x 5 м 1,25 см x 5 м 2 см x 3 м, 2 см x 5 м 2,5 см x 5 м 3 см x 3 м, 3 см x 5 м 4 см x 5 м, 5 см x 5 м 1,25 см x 9,14 м 2,5 см x 9,14 м 5 см x 9,14 м	1,25 см x 5 м 2,5 см x 5 м 5 см x 5 м 1,25 см x 9,14 м 2,5 см x 9,14 м 5 см x 9,14 м	1,25 см x 5 м 2,5 см x 5 м 5 см x 5 м 1,25 см x 9,14 м 2,5 см x 9,14 м 5 см x 9,14 м	1,25 см x 5 м 2,5 см x 5 м 5 см x 5 м 1,25 см x 9,14 м 2,5 см x 9,14 м 5 см x 9,14 м	5 см x 10 м 10 см x 10 м 15 см x 10 м 20 см x 10 м 10 см x 2 м 15 см x 2 м
Допускаемое отклонение от линейных размеров	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
Материал – основа	100% хлопок	Нетканый материал	Вискоза	Полиэтиленовая пленка	Нетканый материал
Материал – антиадгезионный слой	-	-	-	-	Силиконовая бумага
Материал липкого слоя	цинк-оксид	винил-акрил	винил-акрил	винил-акрил	винил-акрил
Цвет лейкопластыря	Белый, Бежевый	Белый, Бежевый	Белый, Бежевый	Белый	Белый
Сопротивление отслаивания липкого слоя (Н/м)	93,16± 9,3	58,84± 5,9	73,55± 7,4	63,74± 6,4	68,65± 6,9
Индивидуальная упаковка	пластмассовый футляр, картонная коробка	пластмассовый футляр, картонная коробка	пластмассовый футляр, картонная коробка	пластмассовый футляр, картонная коробка	картонная коробка
Групповая упаковка, кол-во, шт.	6, 12, 18, 24, 48 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	6, 12, 18, 24, 48 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	6, 12, 18, 24, 48 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	6, 12, 18, 24, 48 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	6, 12, 18, 24, 48 и прочие вариации кратные 6, не более 2400
Транспортная упаковка, кол-во, шт.	180, 360, 480, 720, 1440 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	180, 360, 480, 720, 1440 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	180, 360, 480, 720, 1440 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	180, 360, 480, 720, 1440 и прочие вариации кратные 6, не более 2400	180, 360, 480, 720, 1440 и прочие вариации кратные 6, не более 2400
Транспортная упаковка, кг	Масса брутто не более 50 кг	Масса брутто не более 50 кг	Масса брутто не более 50 кг	Масса брутто не более 50 кг	Масса брутто не более 50 кг

17. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Медицинское изделие “Пластырь медицинский фиксирующий”, можно использовать в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в домашних условиях. Использование медицинского изделия не требует назначения врача.

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в вашем регионе. Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

19. Гарантии

Производитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям нормативного документа, при условии соблюдения параметров хранения, транспортирования, установленным нормативным документом.

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества «пластырь медицинский фиксирующий», производства фирмы Лиепайской свободной экономической зоны Общество с ограниченной ответственностью «НордеПласт», Латвийская Республика, обращаться по адресу:

Акционерное общество «Авангард»

Юридический адрес: 115533, г. Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29

Тел.: +7(495) 781-41-79

Адрес электронной почты: lauma@laumamedical.ru

Латвия, г.Лиепая, ул.Паста, д.7А, 25 августа 2017 года.

Я, присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА, удостоверяю, что Романс ГРАМИКО (Romāns GRAMIKO), родившийся 21 февраля 1977 года в г.Лиепая, персональный код 210277-10823, декларированное место жительства: Латвия, г.Лиепая, ул.Клайпедас, д.110, кв.80, личность которого установлена по паспорту гражданина Латвии LV5369710, выданному 22 марта 2016 года Лиепайским отделением УДГМ, подписал этот документ, проект которого предоставил, в моём присутствии. Удостоверяю подлинность его подписи.

Документы, на которых удостоверена только подлинность подписи, признаются частными документами. За содержание документа присяжный нотариус ответственности не несёт.

Данные лица в день удостоверения подлинности подписи проверены в Регистре жителей и Регистре недействительных документов.

По реестру Nr. 6395

Оплата работы за нотариальное удостоверение	3,53 EUR
НАДС	0,74 EUR
Взыскана государственная пошлина	0,71 EUR
Всего	4,98 EUR



“Латвийская Республика Курземский окружной суд
г.Лиепая Присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА”

Л.МЕДВЕДЕВА



Скреплено и имеется под
печатью десять (10)
нумерованных листов.

Нотариус:

Печать:
[ЛИЕПАЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «НордеПласт»
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА]

Печать:
[ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУРЗЕМСКИЙ
ОКРУЖНОЙ СУД
ПРИСЯЖНЫЙ НОТАРИУС
Г. ЛИЕПАЯ
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА]

Печать:
[ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУРЗЕМСКИЙ
ОКРУЖНОЙ СУД
ПРИСЯЖНЫЙ НОТАРИУС
Г. ЛИЕПАЯ
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА]

Переведено дипломированным переводчиком
Герасевым Иваном Валерьевичем

Герасев Иван Валерьевич

Российская Федерация

Город Москва

Четвёртого сентября две тысячи семнадцатого года

Я, Тербков Алексей Владимирович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Герасева Ивана Валерьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 3-8490

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

А.В. Тербков



Итого прошито и скреплено	
печатью на	21 лист
Нотариус	А.В. Тербков

УТВЕРЖДАЮ

Член Правления

Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт»



Грамико Р.

«20» апреля 2017г.

Проект этикеток медицинского изделия:

Пластырь медицинский фиксирующий

2017

Маркировка индивидуальной (потребительской) упаковки содержит информацию:

наименование изделия, включая вариант исполнения:

Пластырь медицинский фиксирующий тканый, нетканый, полимерный, текстильный, рулонный
размер:

1,25 см x 5 м, 2,5 см x 5 м, 5 см x 5 м, 1,25 см x 9,14 м, 2,5 см x 9,14 м, 5 см x 9,14 м, 5 см x 10 м, 10 см x 10 м, 15 см x 10 м, 20 см x 10 м, 10 см x 2 м, 15 см x 2 м.

наименование, адрес и телефон производителя (международный знак): Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Зиемелю 19, Лиепая, LV-3405, тел.: +(371)20037773, nordeplast.lv@gmail.com

наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя:
Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество "Авангард", 115533, г. Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, тел.: +7(495) 781-41-79, lauma@laumamedical.ru

Знак соответствия

Маркировка CE

надпись «нестерильно»

Знак «однократного использования»

маркировка EAC

код переработки 21 PAP (бумага)

температурный диапазон хранения

маркировка «Grüne Punkt» («Экологическая упаковка»)

торговая марка EcoPlast® (при наличии)

логотип производителя NordePlast

Дата выпуска

Срок годности

Серия (LOT)

Штрих код

Номер и дата регистрационного удостоверения


Условия утилизации: утилизация по классу А (СанПиН 2.1.7.2790-10)

*текст может быть дублирован на других языках


индивидуальная (потребительская) упаковка – картонная коробка на примере упаковки для пластыря медицинский фиксирующий тканый 1,25см x 5м:



Пластырь медицинский фиксирующий тканый 2,5см x 5м:

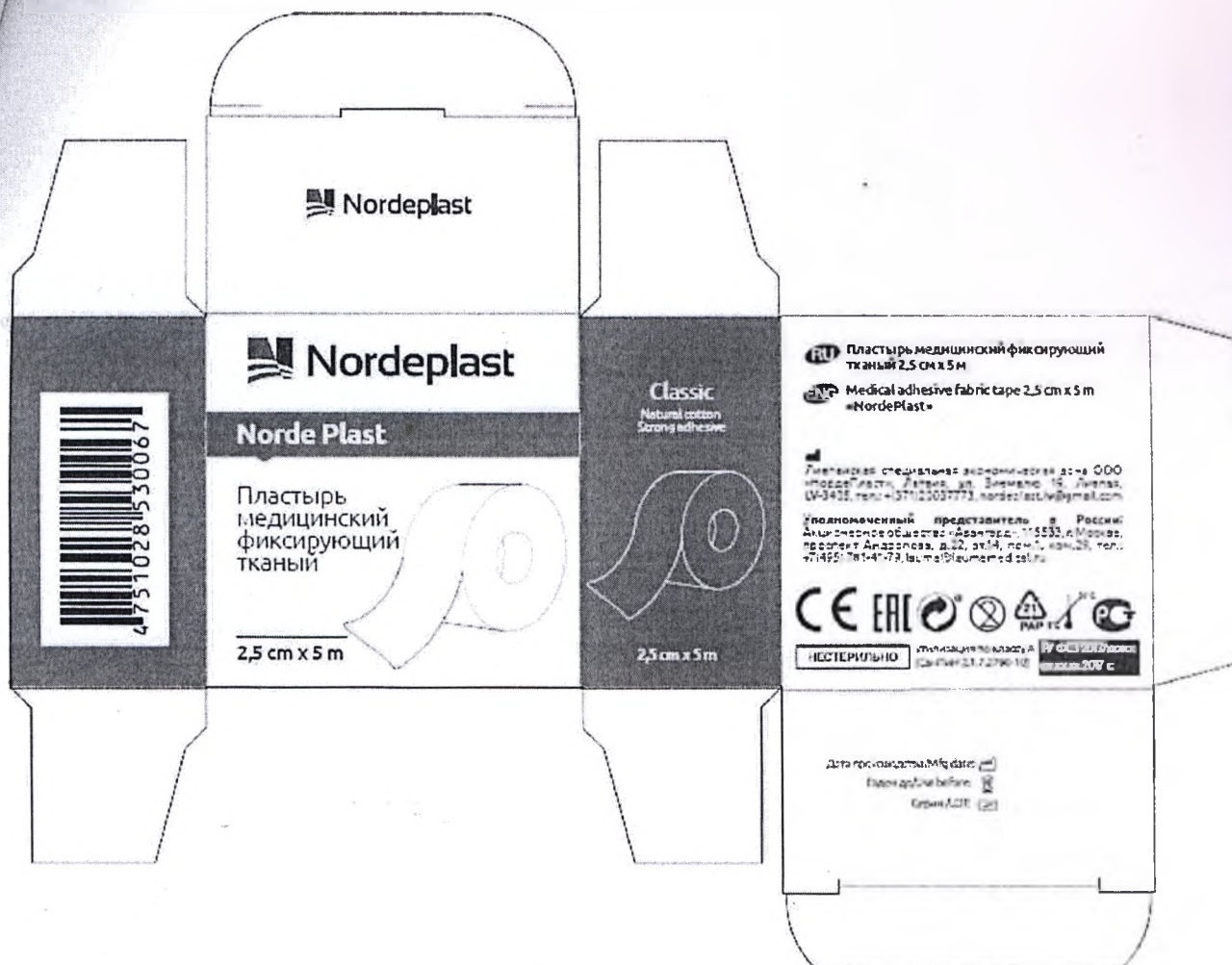

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 2,5см x 5м:

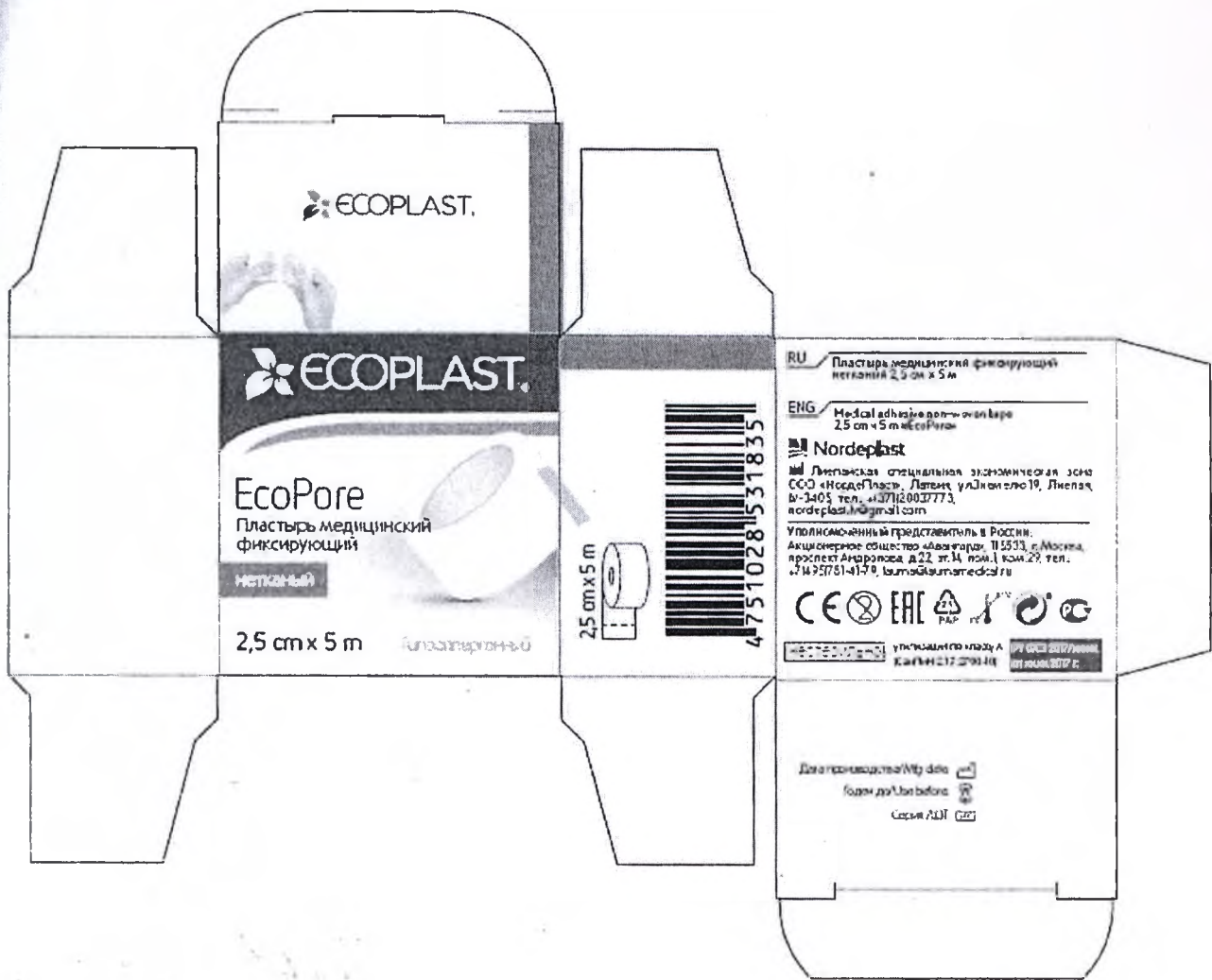


Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 1,25см x 5 м




4

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5см x 5м:

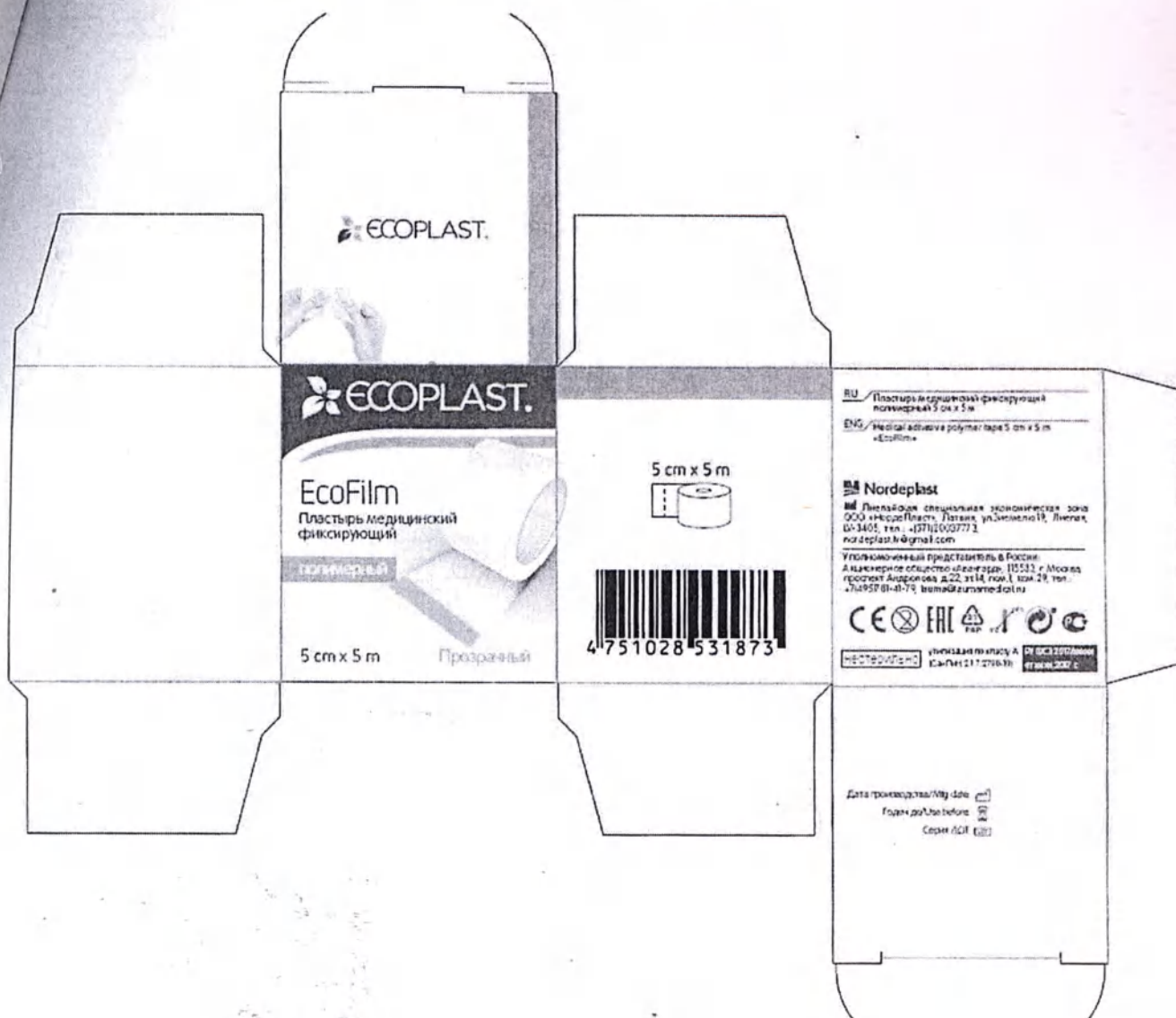


Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5 см x 5 м:

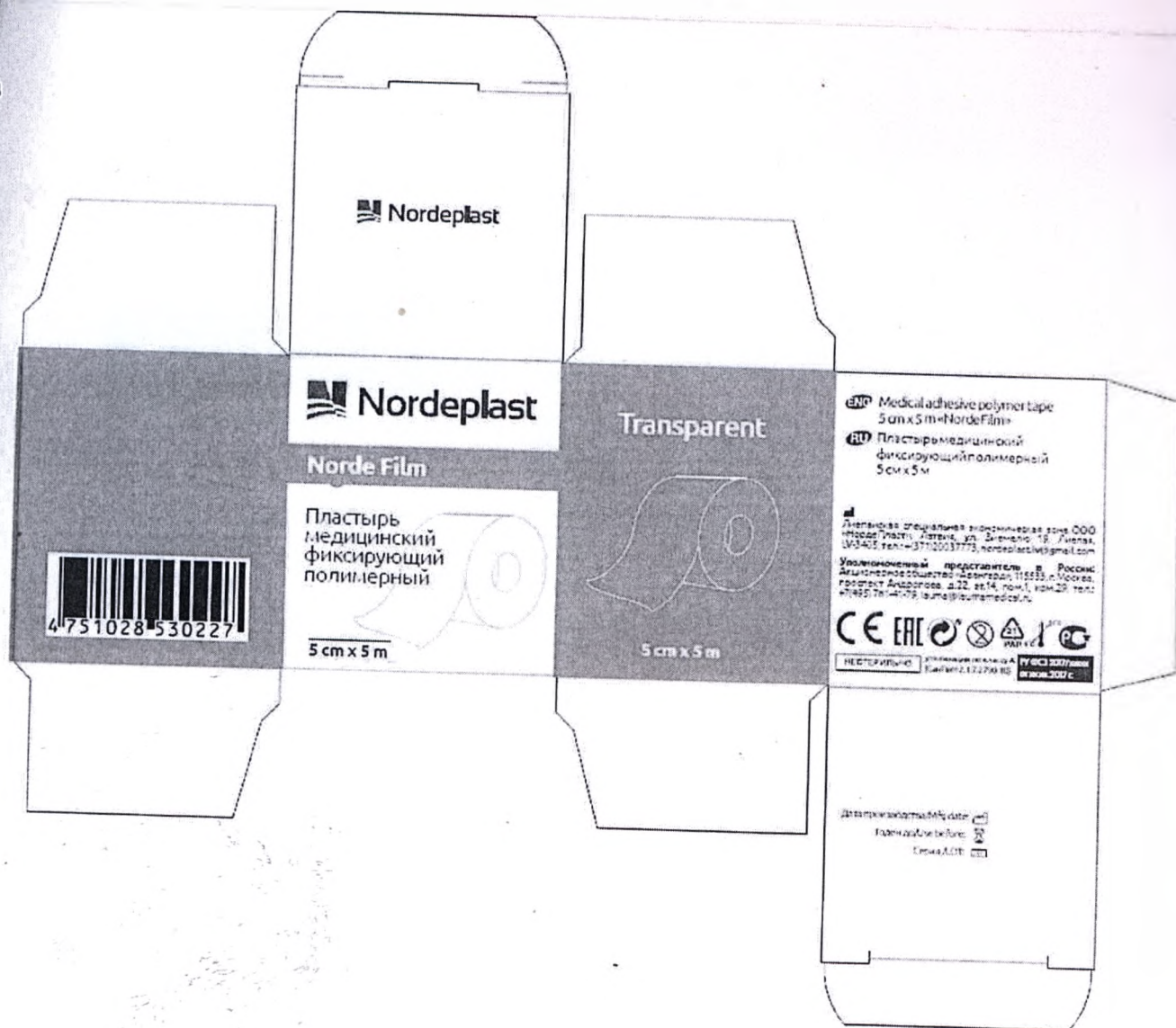

Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25см x 5м:



Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 2,5см x 5м:

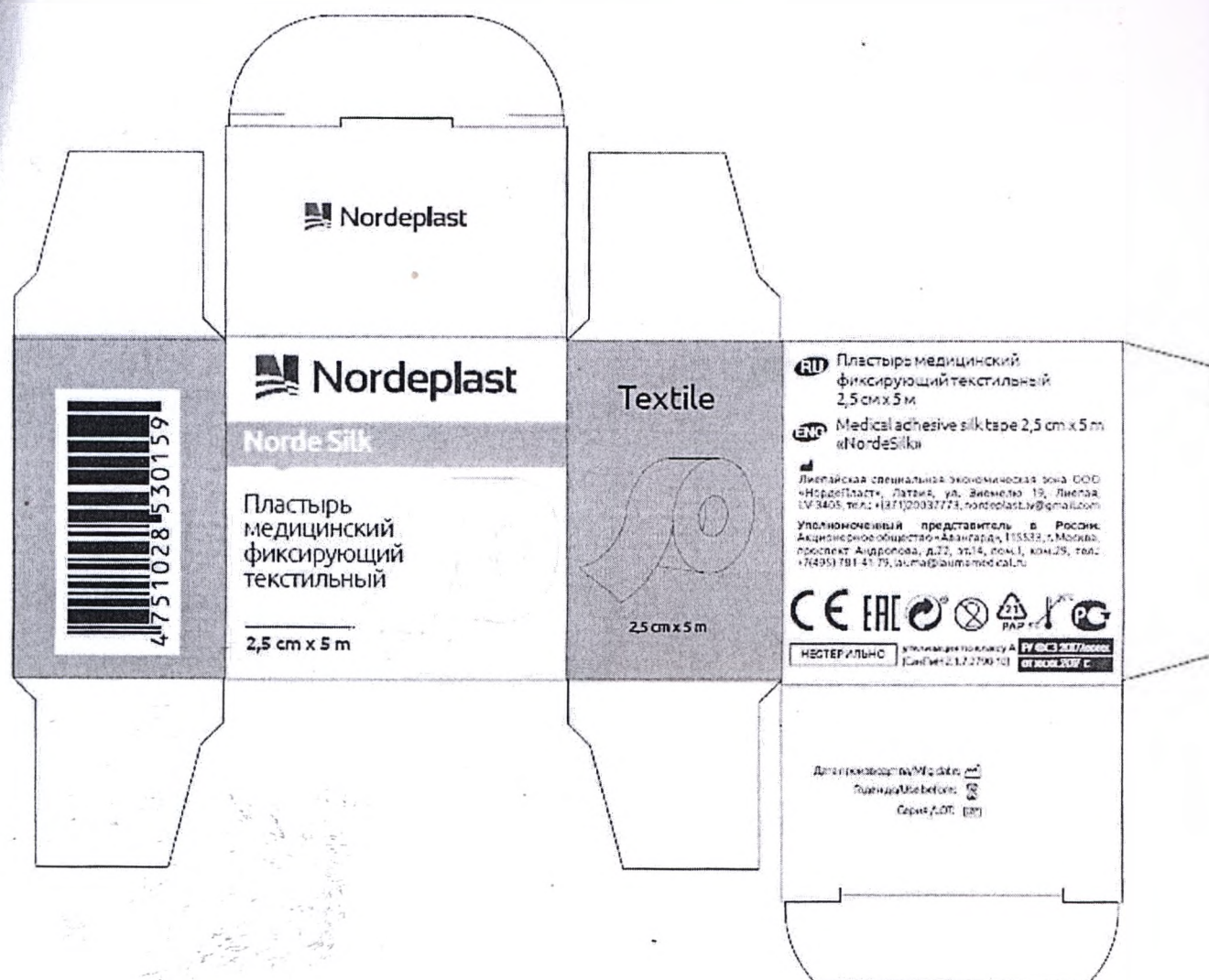

Пластырь медицинский фиксирующий рулонный нетканый 10см x 10м:

Nordeplast



Nordeplast

Soft

Norde Pore

Medical non-woven tape

Пластырь медицинский фиксирующий
рулонный нетканый

Пластик медицинский нетканый

Przylepiec medyczny włókninowy

Neausta materiāla medicīnas plāksteris

1 шт


10 cm x 10 m



4 751028 530333

Данные производителя
Полное наименование
Срок годности (лет)

Soft in roll

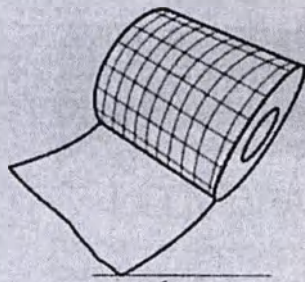

1 шт
10 cm x 10 m

RU Пластырь медицинский фиксирующий рулонный нетканый 10 м



Nordeplast

Литовская специальная
экономическая зона ООО «Нордепласт», Литва, ул. Зиемелю 19, Лиепая, LV-5405
тел: +371(2003)7773, nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России Акционерное общество «Август-ГРД»
115533, г. Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1, комн.29, тел.: +7(495) 791-4179
bismebel@rambler.ru



утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.7.2790-10)

ПУ ФСЗ 2017/000000

от 08.08.2017 г.

Стикер для индивидуальной (потребительской) упаковки – пластмассовый футляр, на примере стикера для Пластырь медицинский фиксирующий тканый 1,25см x 5м:

EcoFix plus

Пластырь
медицинский
фиксирующий



ТКАНЫЙ
1,25 cm x 5 m

Medical adhesive fabric tape
1,25 cm x 5 m «EcoFix plus»



Nordeplast

Литовская специальная экономическая зона
ООО «Нордепласт», Литва, ул. Зиемелю 19,
Лиепая, LV-5405, тел: +371(2003)7773,
nordeplast.lv@gmail.com

Пластырь медицинский фиксирующий
тканый 1,25 см x 5 м

Уполномоченный представитель в России:
Акционерное общество «Август-ГРД», 115533, г.
Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1,
ком.29, тел.: +7(495) 791-4179,
bismebel@rambler.ru

ПУ ФСЗ 2017/000000
от 08.08.2017 г.

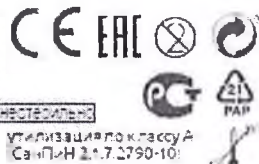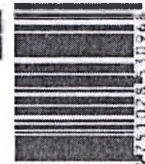

утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.7.2790-10)

Пластырь медицинский фиксирующий тканый 1,25см x 5м:



Nordeplast

Classic

1,25 cm x 5 m

Medical adhesive fabric tape 1,25 cm x 5 m
«Nordeplast»

производства, Литовская специальная
экономическая зона ООО «Нордепласт»,
Литва, ул. Зиемелю 19, Лиепая, LV-5405,
тел: +371(2003)7773,
nordeplast.lv@gmail.com

Пластырь медицинский фиксирующий
тканый 1,25 см x 5 м

Уполномоченный представитель в России:
Акционерное общество «Август-ГРД», 115533, г.
Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14,
пом.1, комн.29, тел.: +7(495) 791-4179,
bismebel@rambler.ru

ПУ ФСЗ 2017/000000
от 08.08.2017 г.



утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.7.2790-10)

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 2,5см x 5м (пластмассовый футляр):



EcoPore plus

Пластырь медицинский
фиксирующий

нетканый
2,5 см x 5 м




Medical adhesive non-woven tape
2,5 cm x 5 m «EcoPore plus»

Пластырь медицинский фиксирующий
нетканый 2,5 см x 5 м

Nordeplast

Лиепайская специальная экономическая зона
ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Зиемелю 19,
Лиепая, LV-3405, тел. +37129037773,
nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России:
Акционерное общество «Авангард», 115533, г.
Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1,
ком.29, тел. +7(495)781-41-79,
lauma@laumamedical.ru

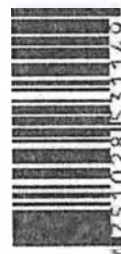

СТЕРИЛЬНО

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 2,5см x 5м (пластмассовый футляр):



Nordepore

Soft

2,5cm x 5m

Medical adhesive non-woven tape
2,5 cm x 5 m «Nordepore»

Пластырь медицинский фиксирующий
нетканый 2,5 см x 5 м

Nordeplast

Лиепайская специальная экономическая зона
ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Зиемелю 19,
Лиепая, LV-3405, тел. +37129037773,
nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России:
Акционерное общество «Авангард», 115533, г.
Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1,
ком.29, тел. +7(495)781-41-79,
lauma@laumamedical.ru

PROCE 2017/2020
01/2017/2



СТЕРИЛЬНО

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5см x 5м (пластмассовый футляр):

14



EcoFilm plus



Пластырь
медицинский
фиксирующий

полимерный
5 см x 5 м

ENP Medical adhesive polymer tape
5 cm x 5 m «EcoFilm plus»

RU Пластырь медицинский
фиксирующий полимерный
5 см x 5 м


Nordeplast
Лиепайская специальная экономическая зона
ООО «НордеПласт», Латвия ул. Зиемелю 19,
Лиепая, LV-3405, тел. +371(2003)7773,
nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России
Акционерное общество «Авангард», 115533, г.
Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1,
ком.29, тел.: +7(495)781-41-79,
izuma@izumamedical.ru


РВФСЗ 2017/00000 от 10.01.2017 г.



утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.7.2790-10)

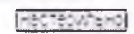

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5см x 5м (пластмассовый футляр):

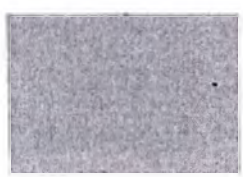

Nordefilm

Transparent

5 см x 5 м

EN Medical adhesive polymer tape
5 cm x 5 m «NordeFilm»

RU Пластырь медицинский
фиксирующий полимерный
5 см x 5 м

Nordeplast

Лиенпайская специальная
экономическая зона ООО «НордеПласт»,
Латвия, ул. Зиемелю 19, Лиенпай, LV-3405,
т е л . : + (3 7 1) 2 0 0 3 7 7 7 3 ,
nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в
России: Акционерное общество
«Авангард», 115533, г. Москва, проспект
Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, тел.:
+7(495) 781-41-79, lauma@laumamedical.ru

РУФСЗ 2017/XXXX OT XX.XX.2017 г.



Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25см x 5м (пластмассовый футляр):

EcoSilk plus

Пластырь
медицинский
фиксирующий



ТЕКСТИЛЬНЫЙ
1,25 см x 5 м

EN Medical adhesive silk tape
5 cm x 5 m «EcoSilk plus»

Лиенпайская специальная экономическая зона
ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Зиемелю 19,
Лиенпай, LV-3405, тел.: +371(0)20037773,
nordeplast.lv@gmail.com

Nordeplast

RU Пластырь медицинский фиксирующий
текстильный 1,25 см x 5 м

Уполномоченный представитель в России:
Акционерное общество «Авангард», 115533, г.
Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.
ком.29, тел.: +7(495) 781-41-79,
lauma@laumamedical.ru

РУФСЗ 2017/XXXX
OT XX.XX.2017 г.



Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25см x 5м (пластмассовый футляр):



Nordesilk

Textile

1,25 cm x 5 m

EN Medical adhesive silk tape 5 cm x 5 m
«Nordesilk»


Nordeplast

Лиенпайская специальная
экономическая зона ООО «НордеПласт»,
Латвия, ул. Зиемелю 19, Лиенпай, LV-3405,
тел.: +371(0)20037773,
nordeplast.lv@gmail.com

RU Пластырь медицинский фиксирующий
текстильный 1,25 см x 5 м

Уполномоченный представитель в
России: Акционерное общество
«Авангард», 115533, г. Москва, проспект
Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, тел.:
+7(495) 781-41-79, lauma@laumamedical.ru

РУФСЗ 2017/XXXX
OT XX.XX.2017 г.

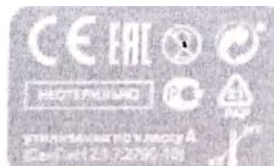

Маркировка групповой упаковки содержит информацию:

наименование изделия, включая вариант исполнения:

Пластырь медицинский фиксирующий тканый, нетканый, полимерный, текстильный.

Размер: 1,25 см х 5 м, 2,5 см х 5 м, 5 см х 5 м, 1,25 см х 9,14 м, 2,5 см х 9,14 м, 5 см х 9,14 м.

Количество: шт. (в групповой упаковке).

наименование производителя (международный знак), юридический адрес и место производства:

Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Зиёмелю 19, Лиепая, LV-3405, тел + (371) 20037773, nordeplast.lv@gmail.com

наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя:

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Авангард», 115533, г. Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, тел.: +7(495) 781-41-79, lauma@laumamedical.ru

Краткое описание и назначение медицинского изделия.

Способ применения.

Противопоказания.

Условия хранения.

Описание утилизации.

Знак соответствия

Маркировка CE

Знак «нестерильно»

Знак «однократного использования»

маркировка EAC

код переработки 21 PAP (бумага)

температурный диапазон хранения (знак)

маркировка «Grüne Punkt» («Экологическая упаковка»)

торговая марка EcoPlast® (при наличии)

логотип производителя NordePlast

Дата выпуска

Срок годности

Серия (LOT)

Рекламное изображение изделия

Штрих код

Номер и дата регистрационного удостоверения

*текст может быть дублирован на других языках

Групповая упаковка – картонная коробка на примере упаковки для
Пластырь медицинский фиксирующий тканый 1,25см x 5м:



EcoFix

Пластырь медицинский фиксирующий

тканый

1,25 cm x 5 m

Гипоаллергенный

Натуральный хлопок

24 шт./pcs

RU Пластырь медицинский фиксирующий тканый 1,25 см x 5 м

Универсальный фиксирующий пластырь на тканевой гиппоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Способ применения:

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.

2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, тесно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания. Абсолютным противопоказанием не является, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 80%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация. Используемые изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 42.17.770-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Nordeplast Юридический адрес и место производства:

Липецкая специальная экономическая зона СОО «НордПласт», Патвия, Липецкая обл., Липецкая, IV-3409, тел.: +37120037773, nordeplast@yandex.ru

Уполномоченный представитель в России: Анциферовское общество «Авангард», 115503, г.Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.1, ком.29, тел.: +7495761-41-79, info@avangard.ru

UA Пластырь медицинский тканый 1,25 см x 5 м

Пластырь медицинский на тканевой основе. Гипоаллергенный. Максимально адгезивен, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Виробник:

Ліпівка: спеціалізована економічна зона СІА «НордПласт», Патвія, Липецька, Жовтєвої Кл. 19, ЛБ-3409, тел.: +37120037773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛІК МЕДКАЛЬОН», м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 21 Б, тел.: +38 099 2320047

PL Przyłepiac medyczny tkaninowy 1,25 cm x 5 m

Hipoalergiczny tkaninowy na Ukrainie. Plaster posiada wysoką przyczepność, łatwo do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju.

Dystrybutor w Polsce: «AUDA Sp. z o.o.», ul. Zagórszczy 42 m. 43, 03-937 Warszawa, tel.: +48 22 6136603

IVF Auduma medicinas plāsteris 1,25 cm x 5 m

ENG Medical adhesive fabric tape 1,25 cm x 5 m «EcoFix»

18
Боковые стороны:

 ECOPLAST.


Дата производства/Mfg date: 
Годен до/Use before: 
Серия/LOT: 

EcoFix
Пластырь медицинский
фиксирующий

ТЭФИ

24 шт/pcs

1,25 cm x 5 m

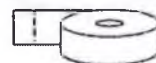

«ПРИЗНАК ПО КЛАССУ А»
Конфиг 2 17 2750-10

Срок годности
до 01.01.2017 г.



пластырь медицинский фиксирующий тканый 1,25см x 5м:

ECOPLAST.

ECOPLAST.



4 751028 532795

Данная информация
предоставлена
для информации


ECOPLAST.

EcoFix plus

Пластырь
медицинский
фиксирующий

тканый

1,25 cm x 5 m

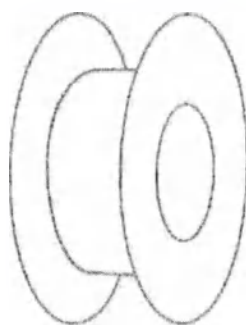

18 шт/пач.

EcoFix plus

Пластырь
медицинский
фиксирующий

тканый



1,25 cm x 5 m

Пластырь медицинский фиксирующий
тканый 1,25 см x 5 м.

Универсальный фиксирующий пластырь на тканевой гиппоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляет следов клея.

Способ применения:

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта пластырем.

2) Отделить нужную длину наклеить пластырь, плотно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания. Абсолютные: противопоказаний на выделение крови, сыпь, индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 32°C, относительной влажности до 80%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация. Использование изделий относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.17.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Nordeplast

Юридический адрес и место производства:
Липецкая область, г. Железнодорожный, ООО
«Нордепласт», ул. Дзержинского, д. 10, 1000,
тел.: +7 (374) 200-8773, e-mail: info@nordeplast.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Импульс», обществу с ограниченной ответственностью
г. Москва, пр. Мухоморова, д. 22, стр. 1, 100000, тел.: +7 (495) 911-1116,
info@impuls-med.ru

Пластырь медицинский тканый 1,25 см x 5 м.

Платформа для размещения информации о товаре. Информация о товаре, его свойствах, условиях хранения и использования.

ad Depozone

Платформа для размещения информации о товаре. Информация о товаре, его свойствах, условиях хранения и использования.

Уполномоченный представитель в Украине:

ООО «Импульс», обществу с ограниченной ответственностью, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 104, 23-й к/д, тел.: +38 (099) 232-9910

Przyklep medyczny tkanowy 1,25 cm x 5 m

Przyklep medyczny tkanowy 1,25 cm x 5 m. Płatnik powłoka wysoce przyczepna, łatwo się usuwa bez uszkodzenia skóry.

Dystrybutor w Polsce: «A. OPA» Sp. z o.o., ul. Łódzka 42 m. 42, 01-627 Warszawa, tel.: +48 22 4546000

Auguma medicinas plākšters 1,25 cm x 5 m

Medicinisks adhésīvs plākšters 1,25 cm x 5 m EcoFix



Уполномоченный представитель в Казахстане: А. О. ПА, тел.: +7 (77) 277-0000, info@opa.kz

Пластырь медицинский фиксирующий тканый 2,5 см x 5 м:



Nordeplast

Classic

Natural cotton
Strong adhesive

Norde Plast

Medical fabric tape

Przylepiec medyczny tkaninowy

Médical fixation plâtre tissé

Пластырь медицинский фиксирующий тканый

Пластир медичний тканый


Тоқылған негіздегі медициналық бұласыры

Auduma medicīnas plāksteris

Medicininė lino lipni juosta

24 шт/pcs

2,5 cm x 5 m

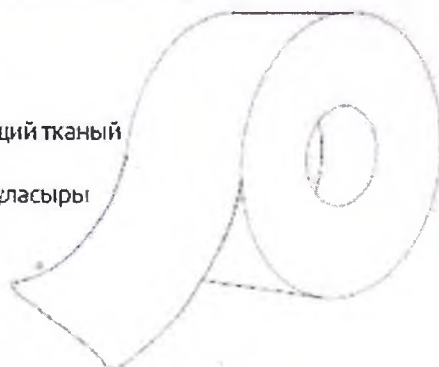

RU Пластырь медицинский фиксирующий тканый 2,5 см x 5 м

Универсальный фиксирующий пластырь на тканевой гиппоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Способ применения:

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.
2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, тесно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 80%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация: использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с Сан-Пин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Юридический адрес и место производства: Лиепайская специальная экономическая зона ТОО «НордеПласт», Латвия, ул. Зiemeļos 19, Лиепая, LV-3405, тел.: +371 20037773, nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Авангард», 115523, г. Москва, проспект Андропова, д.22, эт.34, пом.1, комн.29; тел.: +7 (495) 781-4179, avta@tautamedical.ru

UA Пластир медичний тканый 2,5 см x 5 м «НордеПласт»

Пластир медичний на тканиній основі. Гіпоалергенний. Має високу адгезію, легко видаляється – не залишаючи слідів клею.

Виробник:

Літваро спеціалізація економічна зона СІА «НордеПласт», Латвія, Літваро, Зiemeļos 19, LV-3405, тел.: +371 20037773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛТІК МЕДІКАЛ» 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23/5, тел.: +38 099 2328047

PL Przylepiec medyczny tkaninowy 2,5 cm x 5 m «NordePlast»


Hipoalergiczny zawieszaniej na tkaninie. Plaster posiada wysoką przyczepność, łatwo do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju.

Dystrybutor w Polsce: «AIDA Sp. z o.o.», ul. Zwycięzcow 42 m. 43, 03-937 Warszawa, tel.: +48 22 6156603

LV Auduma medicīnas plāksteris 2,5 cm x 5 m

ENP Medical adhesive fabric tape 2,5 cm x 5 m «NordePlast»

боковые стороны:

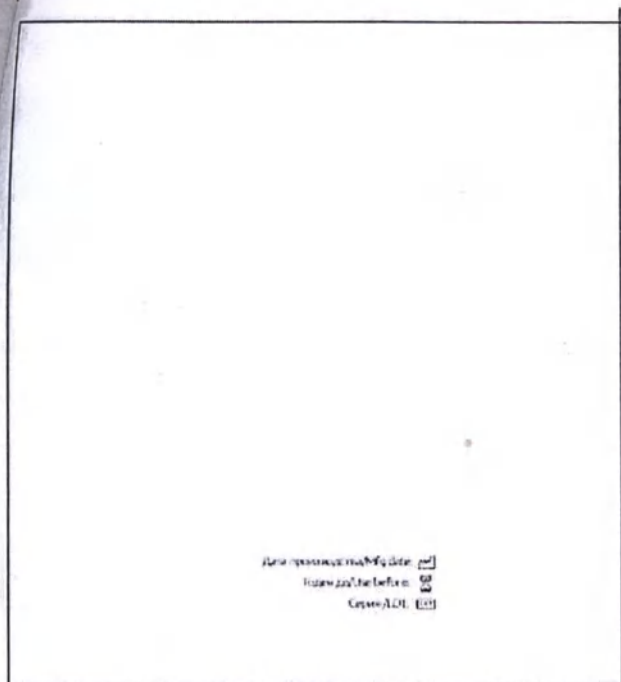

Дата производства (Mfg date):
Исходный материал:
Состав:

Classic
Natural cotton
Strong adhesive

24 шт/pcs
2,5 cm x 5 m

24 шт/pcs
2,5 cm x 5 m



утилизация по классу А (СанПиН 2.1.7.2790-10)



Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 2,5см x 5м:



ECOPLAST®

EcoPore
Пластырь медицинский
фиксирующий
нетканый

2,5 cm x 5 m
Гипоаллергенный

24 шт/пач

RU Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 2,5 см x 5 м

Универсальный фиксирующий пластырь на нетканой гипоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. В основе натуральная вискоза. Легко снимается без применения ножниц. Рекомендуется применять для детей и людей с особо чувствительной кожей.

Способ применения

В Снять и вынуть здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.

2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, плотно прижать и разгладить края. Липучка остается рекомендованной.

Противопоказания: Абсолютным противопоказанием не является, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 80%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация: использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.17.27.00-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Nordeplast

Юридический адрес и место производства:
Липовая специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Литва, ул. Земелю 19, Литва, LV-3405, тел.: +37120037773, nordeplast.lv@gmail.com.

Уполномоченный представитель в России: Анциферное общество «Авангард», 115533, г. Москва, протект Андропова, д.22, эт.4, пом.1, комн.29, тел.: +7495761-41-79, lauma@laumamedical.ru

UA Пластырь медицинский нетканый 2,5 см x 5 м «EcoPore»

Гипоаллергенный, легко снимается без ножниц.
Рекомендовано для особенно чувствительной кожи.

Виробник:

Літва: спеціальна економічна зона:
СІА «НордеПласт», Литва, Литва,
Земелю 19, LV-3405, тел.: +37120037773

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «БАЛТІК МЕДКАЛЬ» 01030 м.Київ,
вул. Богдана Хмельницького, буд.23 Б,
тел.: +38 099 2329047

PL Przyklepacz medyczny włókninowy 2,5 cm x 5 m «EcoPore»

Używany do opatrunków mocujących kompresje

Dystrybutor w Polsce: «ALIDA Sp. z o.o.»
ul. Żwiryczów 42 m.43 03-937 Warszawa
tel.: +48 22 6196603

LV Neausta materiāla medicīnas plāksteris 2,5 cm x 5 m «EcoPore»

Medical adhesive non-woven tape 2,5 cm x 5 m «EcoPore»

Боковые стороны:

 ECOPLAST.

Дата производства/Мг. дат.
Годен до/Valid date
Серия/LOT

EcoPore

Пластырь медицинский
фиксирующий

нетканый

24 шт/pcs

2,5 cm x 5 m



УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ И
КОНТРОЛЯ (17-27-90-10)

РР/003/2017/00001
030905/0017 с.



4 751028 532368

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 2,5см x 5м:

ECOPLAST.

ECOPLAST.

ECOPLAST.



Сделано в Китае
Товарный знак № 2
www.ecoplast.com

EcoPore plus

Пластырь
медицинский
фиксирующий

нетканый

2,5 cm x 5 m



12 шт./пач.

EcoPore plus

Пластырь
медицинский
фиксирующий

нетканый



2,5 cm x 5 m

RU

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый
2,5 см x 5 м.

Универсальный фиксирующий пластырь на нетканой гиппоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов.

В основе натуральная вискоза. Липко отслаивается без травмирования кожи. Рекомендуется применять для детей и людей с особо чувствительной кожей.

Способ применения

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.

2) Отделить нужную длину заготовки пластыря, аккуратно и разгладить края. Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания: Абсолютные - противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов в пластыре. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 90%. Срок годности: 5 лет.

Упаковка: использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Nordeplast

Юридический адрес и место производства:
г. Москва, площадь 21, эксклузивная зона ООО
«Nordeplast», Липовый ул. Домово 19, Пятая, 1/1405,
тел. +7(495)2003775, nordeplast@mail.ru

Уполномоченный представитель в России: Ассоциация
общества «Медсервис», 115033, г. Москва, протокон Ангарская,
д.22, стр.14, пом.1, ком.29, тел. +7(495)201-48 79,
info@assosmed.ru

UA

Пластырь медицинский нетканый 2,5 см x 5 м
«EcoPore»

Виробництво: не потребує спеціальних умов зберігання.
Головна компанія: для надання консультацій.

Виробник:

Державна спеціалізована підприємства
ДП «ЕкоПор» (Львів, Україна)
Земельна вул. 19, Львів-3405, тел. +38(0)337773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛТИК МЕДКАП» (ОДНООСІБНЕ)
вул. Богдана Хмельницького, буд. 22/5,
Львів, +38(0)33 2929047

PL

Roztwórca medyczny wieloletni 2,5 cm x 5 m «EcoPore»

Uwaga: do użytku w warunkach kontrolowanych

Dystrybutor w Polsce: «AUSA Sp. z o.o.»

ul. Zawadzka 42 m. 13, 05-750 Warszawa
tel. +48 22 6330603

IV

Neustawia materiału medycznych plasters 2,5 cm x 5 m

«EcoPore»

ENG

Medical adhesive non-woven tape 2,5 cm x 5 m

«EcoPore»



Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 1,25см x 5 м :



Nordeplast

Soft

Norde Pore

Medical non-woven tape

Пластырь медицинский
фиксирующий нетканый

Пластир медичний нетканый

Przylepiec medyczny włókninowy

Neausta materiāla medicīnas plāksteris

24 шт/pcs

1,25 cm x 5 m

RU Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 1,25 см x 5 м

Универсальный фиксирующий пластырь на нетканой нетканой перфорированной основе для фиксации ран, ожогов, порезов, царапин.

В основе нетканый материал. Легко приклеивается к различным типам кожи. Рекомендуется к применению для детей и людей с чувствительной кожей.

Способ применения:

1. Снять защитную пленку. 2. Приложить пластырь к ране, ожогу, порезу, царапине. 3. Слегка надавить на пластырь, чтобы он приклеился к коже. 4. Снять пластырь, когда он больше не нужен.

Противопоказания: Абсолютные противопоказания не выявлены. Однако, следует избегать длительного контакта с кожей, так как это может вызвать раздражение.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от влаги месте. Срок годности: 5 лет.

Упаковка: 24 шт/pcs. 1,25 см x 5 м. «Средства индивидуальной гигиены» (Средства личной гигиены).

Юридический адрес и место производства: Латвия, ул. Вилкитиса 19, Лиепая, LV-3405, тел.: +371 26637773, email: info@nordeplast.lv

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Авдид» 115333, г. Москва, проспект Академика Д. 22, эт. 14, пом. 1, ком. 29, тел.: +7 (495) 781 41 79, email: info@avdida.ru

UA Пластир медичний нетканый 1,25 см x 5 м «НордеПор»

Лікарський, неклієвний, неклієвний, неклієвний.
Рекомендовано для використання на шкірі дорослих.

Виробник:

Латвія, спеціалізована компанія, яка:
СД «НордеПаст», Латвія, Лиепая,
Вилкитиса 19, LV-3405, тел.: +371 26637773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛТИЧМЕДІКАЛ» 01030, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 23 Б,
тел.: +38 099 2329042

PL Przylepiec medyczny włókninowy 1,25 cm x 5 m «NordePore»


Używać do celów medycznych. Nie używać do celów kosmetycznych.

Dystrybutor w Polsce: «AVIDA Sp. z o.o.», ul. Tyniecka 200W 42 m. 43,
05-937 Warszawa, tel.: +48 22 6166603

IV Neausta materiāla medicīnas plāksteris 1,25 cm x 5 m «NordePore»

Medical adhesive non-woven tape
1,25 cm x 5 m «NordePore»

Боковые стороны:

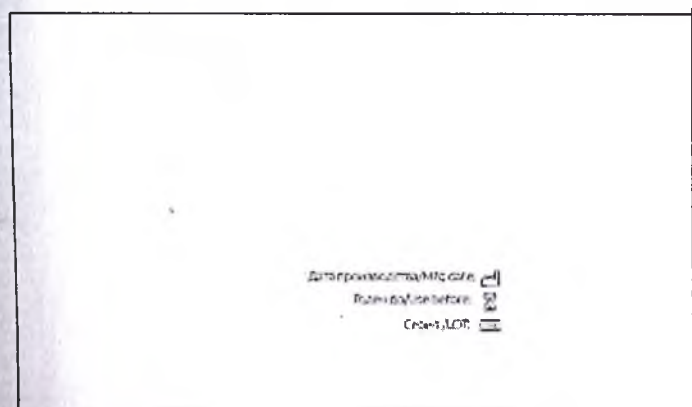

Датированность/Marka:

Регистрация/Regist:

Срок/LOT:

2.6

Soft

24 шт/pcs
1,25 cm x 5 m

24 шт/pcs
1,25 cm x 5 m



утилизация по классу А (Сен-Пин 2.1.7.2790-10)



4751028532672

Пластырь медицинский фиксирующий нетканый 1,25см x 5 м:


8 шт/pcs
1,25 cm x 5 m

Nordeplast
Professional line



РРФСР 2017/XXXX
0123456789

утилизация по классу А
Сен-Пин 2.1.7.2790-10

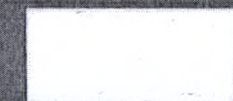

Данная информация
предназначена для
Сен-Пин 2.1.7.2790-10

Nordeplast

Norde Plast

Medical fabric tape
Przylepiec medyczny tkaninowy
Médical fixation plâtre tissé
Пластырь медицинский фиксирующий тканый
Пластир медичний тканий
Тоқылған негіздегі медициналық бұлағыры
Auduma medicinas plāksteris
Medicinihē lino lipni juosta

8 шт/pcs
1,25 cm x 5 m

Classic

Natural cotton
Strong adhesive



Classic

Natural cotton
Strong adhesive



1,25 cm x 5 m

PLA Пластырь медицинский фиксирующий
тканый 1,25 см x 5 м

Универсальный фиксирующий пластырь на тканевой гипоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Способ применения:

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта пластырем.

2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, теоретически прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря.

Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 40%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация: Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 21.7.2780-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация безвозвратным путем.

Юридический адрес и место производства:
Латвийская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Зиемелс 19, Лиепая, LV-3405, тел: +371 20037773, nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России:
Акционерное общество «Авангард», 115533, г. Москва, проспект Андропова д.22, эт.14, пом.1, комн.28, тел: +7(495) 781-41-75, (аутлайн) avtomedica.ru

PLA Пластырь медицинский тканый 1,25 см x 5 м
«НордеПласт»

Пластырь медицинский на тканевой основе, гипоаллергенный. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Производитель:

Латвийская специальная экономическая зона
ОАО «НордеПласт», Латвия, Лиепая,
Зиемелс 19, LV-3405, тел: +371 20037773

Уполномоченный представитель в Украине:

ТОВ «БАЛТИК МЕДИКАЛ» 01030, м. Київ,
буль. Ботанічна Хмельницького, буд. 23 Б,
тел: +38 099 2328047

PL Przyklepiec medyczny tkaninowy 1,25 cm x 5 m
«NordePlast»

Нисоалергічны бавелніаніе на тканіне. Пластер posiada wysoką przyczepność, łatwy do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju.

Dystrybutor w Polsce: «ALDA Sp. z o.o.»
ul. Zwycięzców 42 m. 43, 03-937 Warszawa
tel: +48 22 6136623

LV Auduma medicīnas plāksteris 1,25 cm x 5 m

ENF Medical adhesive fabric tape 1,25 cm x 5 m
«NordePlast»

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5см x 5м:

 **ECOPLAST.**

EcoFilm

Пластырь медицинский
фиксирующий

полимерный



12 шт/pcs

5 cm x 5 m

RU Пластырь медицинский фиксирующий
полимерный 5 см x 5 м

Прозрачный гипоаллергенный водостойкий пластырь для фиксации повязок, компрессов. Легко отрывается без применения ножниц в продольном и поперечном направлении.

Способ применения:

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.

2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, тесно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной

непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительная влажность до 80%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация: Используемые изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.17.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

 **Nordeplast**

Юридический адрес и место производства:

Латвийская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Звиганс 19, Лиепая LV-3405, тел.: +371 66637773, nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Авангард», 115533, г. Москва, присяет Андреева д. 22, эт. 14, пом. 19, тел.: +7 495 781 91 79, luma@auramedical.ru

UA Пластырь медицинский полимерный водостойкий
5 см x 5 м «EcoFilm»

Легко отрывается без ножниц. Гипоаллергенный.

Виробник:

Латвіє: спеціальна економічна зона СІА «НордеПласт», Лятева, Лятева, Земельна 19, ЛВ-3405, тел.: +371 66637773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛТИК МЕДКАЛЬ» 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23 Б, тел.: +38 094 2329047

PL Przyklepiec medyczny polimerowy 5 cm x 5 m
«EcoFilm»

Przezroczysty, hipoalergiczny, wodoodporny przyklepiec taśmy w użyciu dzieli się na części w kierunku wzdluznym i poprzecznym bez użycia nożyczek. Używany do opatrunków mocujących kompresje.

Dystrybutor w Polsce: «ALDA Sp. z o.o.»

ul. Zwycięzów 42 m. 43, 03-957 Warszawa

tel.: +48 22 6136603

LV Polimēra medicīnas plāsteris 5 cm x 5 m
«EcoFilm»

ENG Medical adhesive polymer tape 5 cm x 5 m
«EcoFilm»

ОКОВЫЕ стороны:

 ECOPLAST.

Дата производства/Мг. дата
Годан. до. изв. вост.
Серия АСХ

EcoFilm

Пластырь медицинский
фиксирующий

полимерный

12 шт/pcs

5 cm x 5 m



CE   EAC  21
RAP  



Утилизация по классу А
Сан-Пин 21.7.2790-10

РГ 033 2017/00000
от 09.08.2007 г.



4 751028 532405

пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5см x 5м :



Nordeplast

Transparent

Norde Film

Medical polymer tape

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный


Пластир медичний полімерний водостійкий

Przylepiec medyczny polimerowy

Polimēra medicīnas plāksteris

12 шт/pcs

5 cm x 5 m

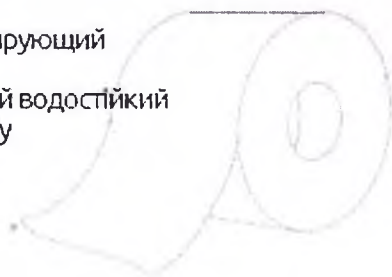

Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5 см x 5 м

Полупрозрачный гипаллергенный водостойкий пластырь для фиксации повязок, компрессов. Легко отслаивается без применения усилий в прохладном и прогретом нагретом состоянии.

Способ применения:

1) Очистить и высушить поверхность кожи в месте контакта пластырем.
2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, тесно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача. Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 80%. Срок годности 5 лет.

Утилизация: Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Юридический адрес и место производства: Лиепайская специальная экономическая зона ООО «Нордепласт», Латвия, ул. Зiemeļu 19, Лиепая, LV-3405, тел.: +371(0)20037773, nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Авентард», 115533, г. Москва, пр-кт Андропова, д.22, эт.14, пом.1, комн.29, тел.: +7(495) 741-4179, avental@aventalmedical.ru



Пластир медичний полімерний водостійкий 5 см x 5 м «ЕкоФіlm»

Легко відшаровується від шкіри та поверхні без нашкоди. Прозоропрозорий.

Виробник:

Літвас спеціальна економічна зона
СА-«Нордепласт», Латвія, Лиепая,
Зіємелю 19, LV-3405, тел.: +371(0)20037773

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «БАЛТІК МЕДКАП» 01030, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 23/5,
тел.: +38(099) 2329047



Przylepiec medyczny polimerowy 5 cm x 5 m «EcoFilm»

Niealergiczny bawełniany na tkaninie. Plaster posiada wysoką przyczepność i łatwy do usunięcia bez uszkodzenia i śladów kleju.

Dystrybutor w Polsce: AL D&S, z o.o., ul. Chłopczew 42 m. 43, 03-937 Warszawa, tel.: +48 22 613 6603



Polimēra medicīnas plāksteris 5 cm x 5 m «EcoFilm»




Medical adhesive polymer tape 5 cm x 5 m «EcoFilm»

Боковые стороны:

24 шт./pcs

Дата производства/Mfg date: 
 Valid until/use before: 
 Страна/LOT: 

Transparent

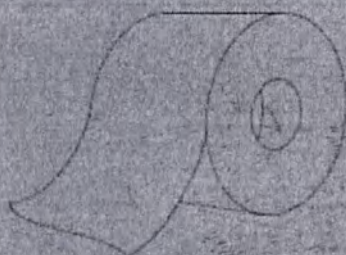

12 шт./pcs
5 cm x 5 m

24 шт./pcs
5 cm x 5 m





Р/Ф СЗ 2017/XXXX
ОТ 2017.2017 г.



утилизация по классу А (СанПиН 2.1.7.2790-10)

4 751 028 532 726

Пластырь фиксирующий полимерный 5см x 5м:

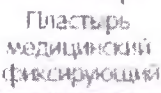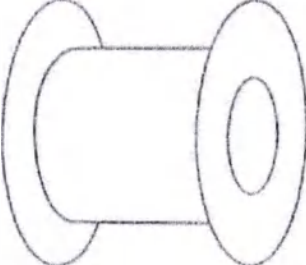		
		
	 Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5 см x 5 м	 полимерный  5 см x 5 м
		
6 шт/пач		

RU Пластырь медицинский фиксирующий полимерный 5 см x 5 м. Прозрачный гипоаллергенный водостойкий пластырь для фиксации повязок, компрессов. Легко отслаивается без применения усилий в продольном и поперечном направлении. Способ применения: 1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем. 2) Сделать нужную длину, надрезать пластырь, точно прижать и разгладить края. Менять согласно рекомендациям врача. Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором. Nordeplast Юридический адрес и место производства: ООО «Нордепласт», Латвия, ул. Дзекеле 19, Лиепая, LV-3401, тел.: +371 20037773, nordeplast@nordeplast.lv Уполномоченный представитель в России: Амуринское общество «Амурская» 165533 г. Москва, пр-т Мухоморова д. 72, стр. 1, пом. 1, стр. 29, тел.: +7 495 751-4174, info@amurmed.ru	UA Пластырь медицинский полимерный водостойкий 5 см x 5 м «EcoFilm» Легко відшарпується від шкіри та покрив, без напруги, гіпоалергенний. Виробник: Літязя спеціалізована економіка зс зонас, СІА «НордеПласт», Латвія, Лієпая, Дзекеле 19, LV-3401, тел.: +37120037773 Уповноважений представник в Україні: ТОВ «БАТІК МЕДКАП» 01036, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23/5, тел.: +38 099 2326047 Przylepiec medyczny polimerowy 5 cm x 5 m «EcoFilm» Przeziroczysty, hipoalergiczny, wodoodporny przylepiec, łatwy w użyciu, dzieli się na części w kierunku wzdużnym i poprzecznym bez użycia nacisku, używany do sprzątnięcia rannych, kompresów. Dystrybutor w Polsce: «AL QA Sp. z o.o.» ul. Żmigrodzka 42 m. 43, 03-937 Warszawa, tel.: +48 22 6106403 Polimēra medicīnas plāsteris 5 cm x 5 m «EcoFilm» Medical adhesive polymer tape 5 cm x 5 m «EcoFilm» ENG «EcoFilm» CE, EAC, PAP, PC Утилизация по классу А СанПиН 2.1.7.2790-10 01.08.2017 г.
--	---

Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25 см x 5 м



EcoSilk

Пластырь медицинский
фиксирующий

текстильный

1,25 cm x 5 m

24 шт./pcs

RU Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25 см x 5 м.

Универсальный фиксирующий пластырь на текстильной гиппоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Способ применения:

1) Счистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.

2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, тесно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 80%. Срок годности: 5 лет.

Утилизация: Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.17.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Nordeplast официальный адрес и место производства:

Латвия: Лиенаяская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвия, ул. Земелина 19, Лиепая, LV-3405, тел.: +371 200 17773, nordeplast@npl.com

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Альфар», 115331 г. Москва, проспект Андропова д.22, эт.14, пом.2, тел.: +7 495 781-41-79, info@albamedical.ru

LV Пластырь медицинский текстильный 1,25 см x 5 м «EcoSilk»

Сучасна, гіпоалергенна тканина, що ефективно витягує та легко розривається.

Виробник:

Лікпаст: спеціальна економічна зона СЗ «НордеПласт», Латвія, Лікпаст, Земелю ієла 19, LV-3405, тел.: +371 200 17773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛТИК МЕДКАЛ» 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23 Б, тел.: +38 099 2329047

PL Płytek medyczny 1,25 cm x 5 m «EcoSilk»

Plaster hipoałergiczny na tkaninie. Plaster posiada wyjątką przyczepność, która umożliwia jego łatwe zdjęcie z skóry.

Dystrybutor w Polsce: «LIDA Sp. z o.o.» ul. Żurajska 42 m. 43, 03-937 Warszawa tel.: +48 22 5136603

LV Teksilna medicīniskā plāsteris 1,25 cm x 5 m «EcoSilk»

EN Medical adhesive silk tape 1,25 cm x 5 m «EcoSilk»

Боковые стороны:



Дата производства/My date

Годен до/Use before

Срок АСТ



EcoSilk

Пластырь медицинский
фиксирующий

текстильный

24 шт/pcs

1,25 cm x 5 m

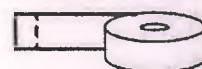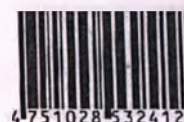уптилизация по классу А
(СанПиН 2.17.2790-10)РУ ФСЗ 2017/20000
от 10.06.2017 г.

Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 2,5 см x 5 м:



Nordeplast

Textile

Norde Silk

Medical silk tape

Пластырь медицинский фиксирующий
текстильный

Пластир медичний текстильний

Przylepiec medyczny

Tekstila medicīnas plāksteris

24 шт/pcs

2,5 cm x 5 m

RU Пластырь медицинский фиксирующий
текстильный 2,5 см x 5 м

Универсальный фиксирующий пластырь на текстильной гипоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую адгезию, легко удаляется, не оставляя следов клея.

Способ применения:

1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем.

2) Отделить нужную длину, наклеить пластырь, плотно прижать и разгладить края.

Менять согласно рекомендациям врача.

Противопоказания: Абсолютных противопоказаний не выявлено, кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря.

Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 60%.

Срок годности: 5 лет.

Утилизация: использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.17.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Возможна утилизация с бытовым мусором.

Юридический адрес и место производства: Липовая специальная экономическая зона ООО «Нордепласт», Латвия, ул. Зiemeļu 15, Лиепая, LV-3405, тел.: +371 20037773, nordeplast.lv@gmail.com

Уполномоченный представитель в России: Акционерное общество «Авангард», 115533, г. Москва, проспект Андропова, д.22, эт.14, пом.14, ком.25, тел.: +7(495) 781-41-79, avntam@avntam.ru

UA Пластир медичний текстильний
2,5 см x 5 м «EcoSilk»

Сучасна гіпоалергенна тканина. Що естетично виглядає та легко розривається.

Виробник:

Ліпівська спеціальна економічна зона
СІА «Нордепласт», Латвія, Ліпая,
Зіємеліс вєла 15, LV-3405, тел.: +371 20037773

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «БАЛТИК МЕД КАЛ» 01030, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 23 Б,
тел.: +38 099 2223047

PL Przylepiec medyczny 1,25 cm x 5 m «EcoSilk»

Plaster hipoalergiczny na tkaninie. Plaster posiada wysoką przyczepność, łatwy do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju.


Dystrybutor w Polsce: ALIDA Sp. z o.o.,
ul. Zwycięzców 42 m. 43, 03-917 Warszawa
tel.: +48 22 6125603

LV Tekstila medicīnas plāksteris
1,25 cm x 5 m «EcoSilk»**ENG** Medical adhesive silk tape 1,25 cm x 5 m
«EcoSilk»

ОКОВЫЕ СТОРОНЫ:

Дата производства (Mfg date): 
 Выдан до (Use before): 
 Серия A.O.T.: 

Textile

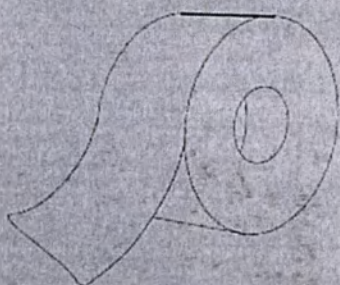

24 шт/pcs
2,5 cm x 5 m

24 шт/pcs
2,5 cm x 5 m




утилизация по классу А (См-ПилН 2.1.7.2790-10)



0 75 1 028 532 740

Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25 см x 5 м:

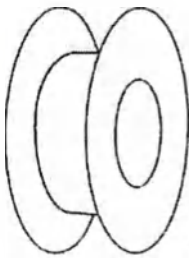		
		EcoSilk plus Пластырь медицинский фиксирующий ТЕКСТИЛЬНЫЙ  18 шт/пач
 4 751028 532825 Сделано в Украине, Харьков, ООО «Нордепласт» Тел: +38 099 2339647 www.noroplast.ua	EcoSilk plus Пластырь медицинский фиксирующий ТЕКСТИЛЬНЫЙ  1,25 cm x 5 m	EcoSilk plus Пластырь медицинский фиксирующий ТЕКСТИЛЬНЫЙ  1,25 cm x 5 m

RU Пластырь медицинский фиксирующий текстильный 1,25 см x 5 м Универсальный фиксирующий пластырь на текстильной гиппоаллергенной основе для фиксации повязок, компрессов. Имеет высокую эластичность, легко удаляется, не оставляет следов клея. Способ применения: 1) Очистить и высушить здоровую поверхность кожи в месте контакта с пластырем. 2) Обрезать нужную длину, наклеить пластырь, плотно прижать и разгладить края. Менять согласно рекомендациям врача. Противопоказания: Абсолютный противопоказаний не выявлено. Кроме случаев индивидуальной непереносимости компонентов пластыря. Условия хранения: при температуре от 5 до 30°C, относительной влажности до 60%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: Используемые изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с Сан-Пин 2.17.2790-10. Сайт гармонизирован с требованиями к обращению с медицинскими отходами. Возмещение утилизации с бытовым мусором. Nordeplast Юридический адрес и место производства: Львівська спеціалізована економічна зона 300 «Нордепласт», Львів, ул. Замкова 15, Львів 79 3405, тел: +38 099 2339647, noroplast.ua@gmail.com Уполномоченный представитель в России: Ассоциация общества «Асангад» 755033 г. Москва, проспект Андропова д.22, 2114, пом.1, ком.29, тел: +7 (495) 751 4179, vita@assanagad.ru	UA Пластырь медицинский текстильный 1,25 см x 5 м «EcoSilk» Функція призначена наклеювати на здорову шкіру для фіксації пов'язок та компресів. Виробник: Львівська спеціалізована економічна зона 300 «Нордепласт», Львів, Львівська область, вул. Замкова 15, Львів 79 3405, тел: +38 099 2339647 Уповноважений представник в Україні: ТОВ «А.І.П.М.І.М.Е.Д.І.КАЛ» 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6/д.23 Б, тел: +38 099 2339647 PL Przykleśnik medyczny 1,25 cm x 5 m «EcoSilk» Plaster przeznaczony do nakleśnięcia na zdrową skórę w celu przykleśnięcia opatrunków i kompresów. Dystrybutor w Polsce: «A.I.P.M.I.M.E.D.I.K.A.L.» z o.o. ul. Wyzwolenia 42 m. 43 03-937 Warszawa tel: +48 22 513 66 01 TV Tekstilan mediches plăkăntă 1,25 cm x 5 m «EcoSilk» ENG Medical adhesive silk tape 1,25 cm x 5 m «EcoSilk»       Утверждено по классу А САНПИН 2.17.2790-10 ТУ 025.001.00000 от 08.06.2007 г.
---	--

25 августа 2017 года, Латвия, гор. Лиепая, ул. Куршу 10.

Я, присяжный нотариус БУРБЕЦКА АЙЯ, свидетельствую подлинность подписи ГРАМИКО РОМАНС (GRAMIKO ROMĀNS), 21 февраля 1977 года рождения, место рождения: Лиепая, персональный код 210277-10823, проживающего в Латвийской Республике, город Лиепая, ул. Клайпедас 110-80, личность которого установлена по удостоверению личности RA0798640, выданному Лиепайским отделом УДГМ 22.03.2016. Подпись сделана в моем присутствии. Документ, на котором нотариус подтвердил подлинность подписи, признается частным документом (статья 116 Закона о нотариате). Личные данные в день засвидетельствования подписи проверены в Регистре населения и в Регистре негодных документов. Место рождения ГРАМИКО РОМАНС в заверении указано согласно данным из Регистра населения.

Зарегистрировано в регистре актов и нотариальных удостоверений за номером 3716

Государственная пошлина 0,71 euro

За заверение 3,53 euro

Пользование базой данных Регистра населения 4,27 euro

Пользование базой данных Регистра негодных документов 1,42 euro

НДС 21% 1,94 euro

Всего 11,87 euro

Присяжный нотариус БУРБЕЦКА АЙЯ



Перевод печати

Латвийская Республика, Курземский окружной суд
г. Лиепая Присяжный нотариус БУРБЕЦКА АЙЯ")



Скреплено вместе под печатью
тридцать семь листов.
Присяжный нотариус БУРБЕЦКА АЙЯ

[Handwritten signature]

Перевод с латышского языка на русский язык

Печать:
[ЛИЕПАЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «НордеПласт»
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА]

Печать:
[ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУРЗЕМСКИЙ
ОКРУЖНОЙ СУД
ПРИСЯЖНЫЙ НОТАРИУС
Г. ЛИЕПАЯ
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА]

Печать:
[ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КУРЗЕМСКИЙ
ОКРУЖНОЙ СУД
ПРИСЯЖНЫЙ НОТАРИУС
Г. ЛИЕПАЯ
ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА]

*Переведено дипломированным переводчиком
Герасевым Иваном Валерьевичем*

Герасев Иван Валерьевич





Российская Федерация
Город Москва

Четвёртого сентября две тысячи семнадцатого года

Я, Тербков Алексей Владимирович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Герасева Ивана Валерьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 3-3403

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

А.В. Тербков



Итого прошито и скреплено	
печатью на 39	лист 39
Нотариус	А.В. Тербков

Компьютерная система "Электрон"