



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by GABRIEL COLON

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Sixteenth day of November, A.D., 2017

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2017-125915

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Peterson


Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."



«Certify»
Manager Regulatory Affairs
Maria Jose Carles

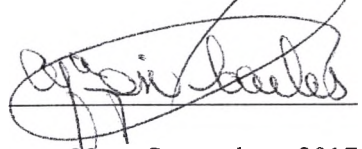



«22» September 2017

State of Florida
County of Dade

Sworn to, and subscribed before me
This _____ Day of _____
By _____

Type of Identification presented

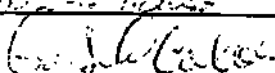

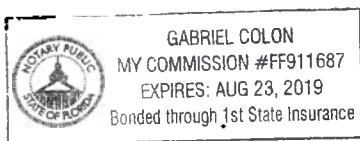

Prophylaxis paste “Sherbet”

Instructions for use

1. The name of the medical product

Prophylaxis paste Sherbet (details in Annex)

2. Information about the developer, manufacturer and place of production of medical products

Developer

Dharma Research, Inc.

5220 N.W. 72nd Avenue, Bay 15, Miami, Florida, 33166 USA

Manufacturer

Dharma Research, Inc.

5220 N.W. 72nd Avenue, Bay 15, Miami, Florida, 33166 USA

The place of production

Dharma Research, Inc.

5220 N.W. 72nd Avenue, Bay#15, Miami, Florida, 33166 USA

3. Appointment, composition and basic principles of the functioning of a medical device

Appointment

Prophylaxis paste "Sherbet" are used in dentistry for professional removal of dental deposits and prevention of dental caries.

Composition and basic principles of the functioning of the medical device

Sherbet Prophylaxis paste is a preventive professional toothpaste with different tastes (Chewing Bubble, Cherry Pie, Chunky Mango, Raspberry Jelly and Assorted flavors) and varying degrees of grit (Fine, Medium, Coarse) which allows doctor to carry out procedures from rough surface cleaning to fine polishing, both teeth and fillings. It can contain 1.23% fluoride ions.

Sherbet Prophylaxis paste, Assorted Flavors taste includes 4 types of taste: Chewing Bubble, Cherry Pie, Chunky Mango, Raspberry Jelly.

Sherbet Prophylaxis paste can be supplied with individual cups (unidoses): 100 unidose (200g) per package and 200 units (400g) in a package or in jars of 100g, 170g, 340g.

Sherbet Prophylaxis paste in unidoses are supplied with Ring -holder Propy Ring. Ring - holder Propy Ring - is a ring with a holder for unidose, which is put on the finger of

the hand to ensure comfortable work of the doctor. Sherbet Prophylaxis paste in unidoses are supplied with Sherbet Disclosing Solution. Sherbet Disclosing Solution - is a solution used to detect plaque. The indicator of dental plaque - Sherbet Disclosing Solution is supplied in a 30 ml vial.

The main active substance of Sherbet Prophylaxis paste is pumice, due to its abrasiveness when the plaque is removed from the teeth.

The degree of granularity of the prophylactic paste depends on the size of the abrasive particles, which mechanically cleans the enamel of the teeth from plaque and tartar. The abrasive is 35-55% of the entire contents of the paste. The larger the particle size of the abrasive, the higher the abrasiveness of the prophylaxes paste.

Indications

- Removal of soft and mineralized plaque from the surface of the teeth.
- Elimination of discolorations caused by the deposition of food pigments on the tooth surface (coffee, tea, tobacco)
- The need of reducing the volume of oral microorganisms, thereby preventing gingivitis and periodontal disease

Contraindications

Identified hypersensitivity to fluoride.

Possible side effects

- Abrasion hard tooth tissues.
 - Should limit the use of fluoride-containing drugs in areas with a high content of fluoride in water (the critical concentration of fluoride for children is more than 1.5 mg / l, for adults - 6 mg / l), as this leads to the accumulation of fluoride in the body. Constant exposure to fluorides can cause the development of fluorosis until the bone is damaged.
- In large quantities (on average more than 20 mg), fluorine can exhibit its toxic properties, namely, the violation of fat and carbohydrate metabolism, i.e. A decrease in the body's ability to absorb sugar.

Terms of use of medical device

Sherbet Prophylaxis pastes are designed for professional use only in health facilities.

Precautions

- Keep away from children.
- Do not swallow. Excessive ingestion of fluorides may cause nausea.
- For professional use only.

4. The composition and materials used

Prophylaxis paste Sherbet presented in Table 1

Table 1

Composition	%
Hydrofluoric acid	4-8

Potassium hydroxide	2-6
Xanthan gum	10-15
Pumice	35-55
Purified Water	20-25
Sodium saccharin	0-5
Flavour	1-2
Food coloring	0-1

Depending on the taste and colors of the Prophylaxis paste Sherbet may contain the following dyes and fragrances (table 2):

Table 2

Flavours
Chewing Bubble
Cherry Pie
Chunky Mango
Raspberry Jelly
Food coloring
FD&C Yellow #5
FD&C Red #40
FD&C Red #28
FD&C Green #3
FD&C Red #33
FD&C Blue #1

Composition of the Sherbet Prophylaxis paste - Fluoride-Free is presented in Table 3

Table 3

Composition	%
Xanthan gum	10-18
Pumice	35-50
Purified Water	20-25
Sodium saccharin	0-5
Flavour	1-2
Food coloring	0-1

Depending on the taste and colors of the Sherbet Prophylaxis paste Fluoride-Free may contain the following colorants and flavorings (table 4):

Table 4

Flavours
Chewing Bubble
Cherry Pie
Chunky Mango
Food coloring
FD&C Yellow #5
FD&C Red #40
FD&C Red #28
FD&C Green #3
FD&C Red #33
FD&C Blue #1

The composition of the Sherbet Prophylaxis paste is a Dye-Free are presented in Table 5

Table 5

Composition	%
Hydrofluoric acid	4-8
Potassium hydroxide	2-6
Xanthan gum	10-15
Pumice stone	35-55
Purified Water	20-25
Saccharin sodium	0-5
Flavor (Taste Cherry Pie)	1-2

The composition of the Sherbet Prophylaxis paste Fluoride-Free & Dye-Free are presented in Table 6

Table 6

Composition	%
Xanthan gum CAS # 11138-66-2	13-18
Pumice stone CAS # 1332-09-8	35-60
Purified Water CAS # 7732-18-5	20-25
Saccharin sodium CAS # 81-07-2	0-5
Aroma	1-2

The composition of the Disclosing Solution Sherbet presented in Table 7

Table 7

Composition	%
Purified water	50-60
Propylene glycol	30-40

Flavour Cherry pie	5-6
The Red dye	4-5
Saccharin sodium	1-2

5. Specifications

Technical characteristics of the Prophylaxis paste Sherbet presented in Table 8

Table 8

Appearance	A thick homogenous paste of uniform color, without visual external impurities
Acidity (pH) at a temperature of 20-25 C	9.00 – 10.70
Identification of fluoride	The presence of fluorides installed
A sample of the Fluoride ion	1.11 – 1.35% (in terms of weight)
The total number of microorganisms	<1 CFU/ml
The size of abrasive grains microns, not more than:	
Fine	44
Medium	51
Coarse	75

Technical characteristics of the Sherbet Prophylaxis paste Fluoride-Free are presented in Table 9

Table 9

Appearance	A thick homogenous paste of uniform color, without visual external impurities
Acidity (pH) at a temperature of 20-25 C	9.00 – 10.70
Identification of fluoride	The presence of fluorides installed
A sample of the Fluoride ion	1.11 – 1.35% (in terms of weight)
The total number of microorganisms	<1 CFU/ml
The size of abrasive grains microns, not more than:	
Fine	44
Medium	51
Coarse	75

Specifications led dental plaque Disclosing Solution Sherbet presented in Table 10

Table 10

Appearance	A liquid solution is homogeneous red color, visually free from foreign substances
Acidity (pH) at a temperature of 20-25 C	6.00 – 7.00
The total number of microorganisms	<1 CFU/ml

6. The methods and techniques of disinfection

Sherbet Prophylaxis paste are supplied non-sterile.

All tools that cannot be sterilized and used during operation should be disinfected according to current regulations, and instructions for their use.

Packaging system for non-sterile devices must keep the product without deterioration at the level of cleanliness stipulated.

7. Packaging

Sherbet Prophylaxis paste is packed in the original manufacturer's packaging.

The packaging ensures safety during storage, transportation and handling from damage and the deterioration of the properties of the products.


8. Information on product labeling

On each package there is a clear marking, containing:

- trade or firm name of the product;
- address and name of the manufacturer or supplier;
- storage condition;
- serial number (Lot);
- the end date of the use of "use up to ..."

The interpretation of symbols used in the marking shown in Table 11

Table 11

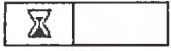Symbol	Transcript
	The batch number
	Shelf life
Re-order:	The article number
	Without fluoride
	Keep away from moisture
	Temperature limiting
	Do not dispose of together with household garbage
	International universal recycling code for polyethylene of high density)

	International universal recycling code for polyethylene of low density)
	International universal recycling code for ABS plastic
	up
	fragile
	International universal recycling code for Polypropylene

9. Precautions

- Keep away from children.
- Do not swallow. Excessive ingestion of fluorides may cause nausea.
- For professional use only.

10. Method of application

10.1 Application of dental material Prophylaxis paste Sherbet for teeth cleaning in unidoses

Before using the Sherbet Disclosing Solution, shake.

Add 10 drops to 30 ml. water. Apply to the surface of the teeth with a cotton swab or ask the patient to rinse the mouth for 5 seconds, then spit it out. Do not swallow. Dental plaque will turn bright red. After marking the location of the plaque, rinse the mouth thoroughly with water and then use a Sherbet paste.

Use a preventative tip or preventative rubber cups. Fill the cup, pressing it on the paste at a slow speed. Maintain the required amount of paste in the cup to avoid too much dissolving the paste with saliva or swallowing it. It is recommended that you use a saliva ejector during the procedure.

10.2 Method of use Dental material for professional teeth cleaning Sherbet Prophylaxis paste in packages

Use a preventative tip or preventative rubber cups. Fill the cup, pressing it on the paste at a slow speed. Maintain the required amount of paste in the cup to avoid too much dissolving the paste with saliva or swallowing it. It is recommended that you use a saliva ejector during the procedure.

11. The conditions of storage and transport

Storage conditions:

- ambient temperature 15-30 ° C;

- non-condensing relative humidity 30 -75 %

Do not freeze.

Keep jars closed when it not in use. Store in the original packaging provided by the manufacturer.

The shelf life of the Sherbet Disclosing Solution is 36 months.

Shelf life of the dental material for professional cleaning of teeth Sherbet Prophylaxis paste under suitable storage conditions is 60 months.

Prophylaxis pastes Sherbet are transported by all types of covered vehicles in accordance with the rules of transportation of goods operating on the appropriate mode of transport and regulatory documents for loading and securing cargo. Conditions of transportation coincide with storage conditions.

12. Disposal of a medical device

Disposal is carried out in accordance with regulatory documents and requirements for the disposal of this type of medical devices adopted in the country of distribution.

Do not discharge excess product into the sewer system, do not dispose of it in a public garbage container; Use the device for the professional disposal of chemical waste.

Prophylaxis paste Sherbet belong to the class D on the classification of the hazard of medical waste specified in SanPiN 2.1.7.2790-10.

The used materials are disposed of according to the specified class of danger of medical waste according to SanPin

13. Warranty

The manufacturer guarantees that the products produced and supplied are free from defects in terms of materials and workmanship. The warranty period is 60 months for Sherbet Prophylaxis paste and 36 months for the indicator of dental plaque - Sherbet Disclosing Solution.

The manufacturer shall not be liable in case of improper use, misuse, negligence and violation of storage conditions. The warranty does not apply to products that have been damaged as a result of improper or incorrect use or if repairs have been made or any changes to the product have been made by any person other than the Manufacturer.

14. Complaint

The company accepting in the territory of the Russian Federation claims from the consumer for the quality of the product:

ООО «StaiNo», Russian Federation, 119415, Moscow, Udaltsova Str., H. 12, room 160

Phone: +7 (495) 540-57-10, E-mail: info@staino.ru, Сайт: <http://staino.ru>

Штат Флорида

Департамент Штата

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Соединенные Штаты Америки
Настоящий официальный документ
2. был подписан Габриэлем Колоном (Gabriel Colon)
3. выступающим в качестве Нотариус Штата Флорида
4. скреплен печатью/штампом Нотариуса, Штат Флорида

УДОСТОВЕРЕНО

5. в г. Таллахасси, Флорида
6. 16 ноября 2017 года
7. Секретарем Штата, Штат Флорида
8. за № 2017-125915
9. Печать/штамп:
Печать: Большая печать Штата Флорида
10. Подпись
[подпись]

Секретарь Штата

DSDE 99 (2/12)

9015695

«УТВЕРЖДАЮ»

**Менеджер по вопросам регистрации
Мария Хосе Карлес**

« 22 » сентября 2017 г.

Профилактическая паста «Sherbet» в исполнениях

Инструкция по применению

[Печать: ДХАРМА РЕСЕАРЧ, ИНК. (DHARMA RESEARCH, INC.)

Корпоративная печать

2012

Флорида]

Штат Флорида

Округ Дэйд

Подписано в моем присутствии сегодня, 13 ноября, Марией Т. Карлес

Тип предъявленного документа: водительское удостоверение

[подпись]

[Штамп: Габриэль Колон

Нотариус штата Флорида

Лицензия №FF911687

Полномочия истекают 23 августа 2019 г.

Застраховано 1 Стэйт Иншуренс]

1. Наименование медицинского изделия

Профилактическая паста «Sherbet», в исполнениях

2. Сведения о разработчике, производителе и месте производства медицинского изделия

Разработчик

Дхарма Ресёрч, Инк. (Dharma Research, Inc.)

5220 Н.В. 72-я Авеню, Строение 15, Майами, Флорида, 33166 США

Производитель

Дхарма Ресёрч, Инк. (Dharma Research, Inc.)

5220 Н.В. 72-я Авеню, Строение 15, Майами, Флорида, 33166 США

Место производства

Дхарма Ресёрч, Инк. (Dharma Research, Inc.)

5220 Н.В. 72-я Авеню, Строение 15, Майами, Флорида, 33166 США

3. Назначение, состав и основные принципы функционирования медицинского изделия

Назначение

Профилактическая паста «Sherbet» применяется в стоматологии для профессионального снятия зубных отложений и предотвращения кариеса зубов.

Состав и основные принципы функционирования медицинского изделия

Профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste представляет собой пасту для очистки зубов с различными вкусами (Жевательная резинка (Chewing Bubble), Вишневый пирог (Cherry Pie), Свежее Манго (Chunky Mango), Малиновое желе (Raspberry Jelly), Ассорти (Assorted Flavors)) и разной степенью зернистости (Мелкая (Fine), Средняя (Medium), Крупная (Coarse)), что позволяет проводить процедуры от грубой очистки поверхности до тонкой полировки, как зубов, так и пломб. Может содержать 1,23% фторид-ионов.

Профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste вкус Ассорти (Assorted Flavors) включает в себя 4 вида вкуса: Жевательная резинка (Chewing Bubble), Вишневый пирог (Cherry Pie), Свежее Манго (Chunky Mango), Малиновое желе (Raspberry Jelly).

Профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste выпускается отдельными индивидуальными чашечками (унидозами): по 100 унидоз (200г) и 200 унидоз (400г) и в баночках по: 100г, 170г, 340г.

Профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste в унидозах поставляется с Кольцом - держателем Prophy Ring. Кольцо - держатель Prophy Ring – представляет собой кольцо с держателем для унидоз, которое надевается на палец руки для обеспечения комфортной работы врача. Профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste в унидозах также поставляется с Индикатором зубного налета Sherbet Disclosing Solution. Индикатор зубного налета Sherbet Disclosing Solution - представляет собой раствор, используемый для выявления зубного налета. Поставляется во флаконе объемом 30 мл.

Основным действующим веществом Профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste является пемза, благодаря абразивности которой и удаляется налёт с зубов.

Степень зернистости профилактической пасты зависит от размера частиц абразива, который механически очищает эмаль зубов от налета и зубного камня. Абразив составляет 35-55% всего содержимого зубной пасты. Чем крупнее размер частиц абразива, тем выше абразивность профилактической пасты.

Показания

- Удаление мягкого и минерализованного зубного налета с поверхности зубов.
- Устранение дисколорита, вызванного отложением на поверхности зубов пищевых пигментов (кофе, чай, табак)
- Необходимость уменьшения объёма ротовых микроорганизмов, благодаря чему происходит предотвращение гингивита и заболеваний пародонта.

Противопоказания

Выявленная гиперчувствительность к фторидам.

Возможные побочные эффекты

- Стираемость твердых тканей зуба.
- Следует ограничить применение фтор содержащих препаратов на территориях с повышенным содержанием фтора в воде (критическая концентрация фтора для детей - больше 1,5 мг/л, для взрослых - 6 мг/л), так как это приводит к накоплению фтора в организме. Постоянное воздействие фторидов может вызвать развитие флюороза вплоть до поражения костей.

Условия применения медицинского изделия

Профилактическая паста «Sherbet» предназначена только для профессионального применения в условиях ЛПУ.

Меры предосторожности

- Беречь от детей.
- Не глотать. Избыточное попадание фторидов в организм может привести к тошноте.
- Только для профессионального применения.

4. Состав и применяемые материалы

Состав профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste представлен в Таблице 1

Таблица 1

Состав	%
Плавиковая кислота	4-8
Гидроксид калия	2-6
Ксантановая камедь	10-15
Пемза	35-55
Очищенная вода	20-25
Сахарин натрия	0-5
Ароматизатор	1-2
Пищевой краситель	0-1

В зависимости от вкуса и расцветки профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste может содержать следующие красители и ароматизаторы (Таблица 2):

Таблица 2

Ароматизаторы
Вкус Жевательная резинка (Chewing Bubble)
Вкус Вишневый пирог (Cherry Pie)
Вкус Свежее Манго (Chunky Mango)
Вкус Малиновое желе (Raspberry Jelly)
Пищевые красители
FD&C Yellow #5 (Желтый)
FD&C Red #40 (Красный)
FD&C Red #28 (Красный)
FD&C Green #3 (Зеленый)
FD&C Red #33 (Красный)
FD&C Blue #1 (Синий)

Состав Профилактической пасты - без фтора Sherbet Prophylaxis paste - Fluoride-Free представлен в Таблице 3

Таблица 3

Состав	%
Ксантановая камедь	13-18
Пемза	35-60

Пищевой краситель	0-1
Очищенная вода	20-25
Сахарин натрия	0-5
Ароматизатор	1-2
Пищевой краситель	0-1

В зависимости от вкуса и расцветки Профилактическая паста Sherbet Prophylaxis paste - без фтора Sherbet Prophylaxis paste - Fluoride-Free может содержать следующие красители и ароматизаторы (Таблица 4):

Таблица 4

Ароматизаторы
Вкус Вишневый пирог (Cherry Pie),
Вкус Жевательная резинка (Chewing Bubble)
Вкус Свежее Манго (Chunky Mango)
Пищевые красители
FD&C Yellow #5 (Желый)
FD&C Red #40 (Красный)
FD&C Red #28 (Красный)
FD&C Green #3 (Зеленый)
FD&C Red #33 (Красный)
FD&C Blue #1 (Синий)

Состав Профилактической пасты - без красителя Sherbet Prophylaxis paste - Dye-Free, представлен в Таблице 5

Таблица 5

Плавиковая кислота	4-8
Гидроксид калия	2-6
Ксантановая камедь	10-15
Пемза	35-55
Очищенная вода	20-25
Сахарин натрия	0-5
Ароматизатор (Вкус Вишневый пирог (Cherry Pie)	1-2

Состав Профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste - без фтора и без красителя Sherbet Prophylaxis paste - Fluoride-Free & Dye-Free представлен в Таблице 6

Таблица 6

Состав	%
--------	---

Ксантановая камедь	13-18
Пемза	35-60
Очищенная вода	20-25
Сахарин натрия CAS #81-07-2	0-5
Ароматизатор	1-2

Состав Индикатора зубного налета Sherbet Disclosing Solution представлен в Таблице 7

Таблица 7

Состав	%
Очищенная вода	50-60
Пропиленгликоль	30-40
Ароматизатор (Вкус Вишневый пирог (Cherry Pie))	5-6
Краситель Red CAS #3	4-5
Сахарин натрия	1-2

5. Технические характеристики

Технические характеристики Профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste представлены в Таблице 8

Таблица 8

Внешний вид	Густая однородная паста однородного цвета, визуально без внешних примесей
Кислотность (pH) при температуре 20-25 С	9.00 – 10.70
Идентификация фторидов	Наличие фторидов установлено
Проба Фторид-ионов	1.11 – 1.35% (в весовом отношении)
Общее количество микроорганизмов	<1 КОЕ/мл
Величина абразивных зерен, мкм, не более:	
Зернистость Мелкая (Fine)	44
Зернистость Средняя (Medium)	51
Зернистость Крупная (Coarse)	75

Технические характеристики Профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste - без фтора Sherbet Prophylaxis paste - Fluoride-Free представлены в Таблице 9

Таблица 9

Внешний вид	Густая однородная паста однородного цвета, визуально без внешних примесей
Кислотность (pH) при температуре 20-25 С	9.00 – 10.70
Общее количество микроорганизмов	<1 КОЕ/мл
Величина абразивных зерен, мкм, не более:	
Зернистость Мелкая (Fine)	44
Зернистость Средняя (Medium)	51

Зернистость Крупная (Coarse)	75
------------------------------	----

Технические характеристики Индикатора зубного налета Sherbet Disclosing Solution представлены в Таблице 10

Таблица 10

Внешний вид	Жидкий раствор однородного красного цвета, визуальнo свободный от посторонних веществ
Кислотность (pH) при 20-25:	6.00 – 7.00
Общее количество микроорганизмов	<1 КОЕ/мл

6. Способы и методы дезинфекции

Профилактические пасты Sherbet поставляются нестерильной.

Все инструменты, не подлежащие стерилизации и используемые во время работы, следует продезинфицировать по действующим нормативам и инструкциям по их применению. Система упаковки для нестерильных изделий должна сохранить продукт без ухудшения на уровне предусмотренной чистоты.

7. Упаковка

Профилактическая паста Sherbet упакована в оригинальную упаковку изготовителя.

Упаковка изделия обеспечивает сохранность при хранении, транспортировании и обращении от повреждения и ухудшения свойств изделия.

8. Информация о маркировке изделия

На каждой упаковке имеется четкая маркировка, содержащая:

- торговое или фирменное название изделия;
- адрес и наименование предприятия-изготовителя или поставщика;
- условие хранения;
- серийный номер (Лот);
- дата окончания применения «использовать до...»

Расшифровка символов применяемых в маркировке представлена в Таблице 11

Таблица 11

Знак, символ	Расшифровка
	Номер партии
Re-order:	Номер артикула
Exp.date	Годен до

	Без фтора
	Беречь от влаги
	Ограничение температуры
	Не утилизировать вместе с бытовым мусором
	Международный универсальный код переработки для полиэтилена высокой плотности)
	Международный универсальный код переработки для полиэтилена низкой плотности)
	Международный универсальный код переработки для АБС-пластика
	Вверх
	Хрупкое
	Международный универсальный код переработки для полипропилена

9. Меры предосторожности

- Беречь от детей.
- Не глотать. Избыточное попадание фторидов в организм может привести к тошноте.
- Только для профессионального использования.

10.Способ применения профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste

Перед применением Индикатора зубного налета Sherbet Disclosing Solution, встряхнуть.

Добавить 10 капель в 30 мл. воды. Нанесите на поверхность зубов с помощью ватного тампона или попросите пациента прополоскать рот в течение 5 секунд, затем выплюнуть. Не глотать. Зубной налет окрасится ярко красным цветом. Отметив место расположения налета тщательно прополоскать рот водой и затем используйте пасту Sherbet.

Используйте профилактический наконечник или профилактические резиновые чашечки. Наполните чашечку, надавив ею на пасту на медленной скорости вращения. Поддерживайте необходимое количество пасты в чашечке, чтобы избежать слишком сильного растворения пасты слюной или ее проглатывания. Рекомендуется использовать слюноотсос во время процедуры.

11. Условия хранения и транспортировки

Условия хранения:

- температура окружающей среды 15–30 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 75 % без конденсации влаги.

Не допускать замораживания.

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла, искр и пламени.

Хранить контейнеры закрытыми, когда он не используется. Хранить в оригинальной упаковке, предоставленной изготовителем.

Срок годности Индикатора зубного налета Sherbet Disclosing Solution 36 месяцев.

Срок годности Профилактической пасты Sherbet при соответствующих условиях хранения 60 месяцев.

Профилактическая паста Sherbet транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, и нормативными документами по погрузке и креплению грузов. Условия транспортировки совпадают с условиями хранения.

12. Утилизация медицинского изделия

Утилизация проводится в соответствии с нормативными документами и требованиями для утилизации данного вида медицинских изделий, принятыми в стране распространения.

Не сливать излишки продукта в канализацию, не выбрасывать в общественный мусорный контейнер; использовать устройство для профессиональной утилизации химических отходов. Профилактическая паста «Sherbet» относится к классу Г по классификации опасности медицинских отходов, указанной в СанПиН 2.1.7.2790-10.

Использованные материалы утилизируются согласно указанному классу опасности медицинских отходов по СанПиН

13. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует, что производимые и поставляемые изделия не имеют дефектов с точки зрения качества материалов и изготовления. Гарантийный срок - 60 месяцев для Профилактической пасты Sherbet Prophylaxis paste и 36 месяцев для индикатора зубного налета Sherbet Disclosing Solution.

Изготовитель не несет ответственности в случае неправильного использования, использования не по назначению, небрежности и нарушений условий хранения. Гарантия не применяется к продуктам, которые были повреждены в результате ненадлежащего или неправильного использования или если были внесены какие-либо изменения в продукт любым лицом кроме Производителя.

14. Рекламация

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта:

Общество с ограниченной ответственностью «СтэйНоу»

ООО «СтэйНоу», РФ, 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 12, ком.160

Тел.: +7 (495) 540-57-10, E-mail: info@staino.ru, Сайт: <http://staino.ru>



Общество с ограниченной ответственностью «СтэйНоу»

ООО «СтэйНоу», РФ, 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 12, ком.160

Тел.: +7 (495) 540-57-10, E-mail: info@staino.ru, Сайт: <http://staino.ru>

Перевод выполнила переводчик

Стариченко Наталья Сергеевна

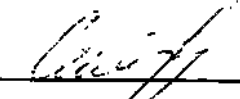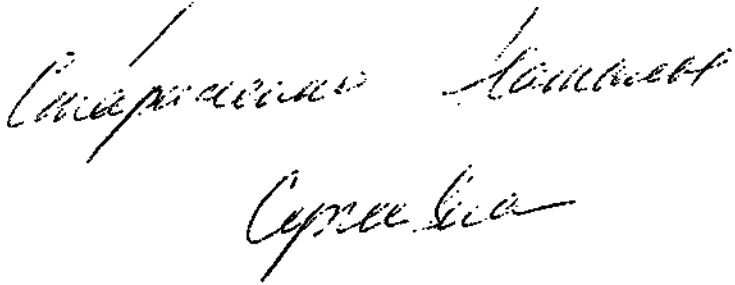Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать четвертого ноября две тысячи семнадцатого года.

Я, Шингарева Диана Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Шайкевич Марии Леонидовны, свидетельствую подлинность подлинности перевода переводчика Стариченко Натальи Сергеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-7526

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.



Д.В. Шингарева

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 21 лист.

Д.В. Шингарева

Зарегистрировано.
№ 5-742



Российская Федерация
Город Москва
Первого декабря две тысячи семнадцатого года.

Я, Шуршакова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 5-742

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 220 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 100 руб. 00 коп.



Е. Е. Шуршакова