

«Утверждаю»



Генеральный директор ООО «ДАЛАНС»

Скомаровская А.О.

«01» марта 2018 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Аппаратная платформа ENDYMED для неинвазивных и малоинвазивных косметологических процедур с принадлежностями

2018

Аппаратная платформа ENDYMED для неинвазивных и малоинвазивных косметологических процедур с принадлежностями , варианты исполнения:


EndyMed PRO, в составе:


- основной блок – 1 шт.
- сетевой кабель – 1 шт.


Принадлежности:


- Манипула iFine -1 шт.,
- Манипула Small -1 шт.,
- Манипула MiniShaper -1 шт.,
- Манипула Large -1 шт.,
- Манипула Shaper 3D -1 шт.,
- Манипула Contour -1 шт.,
- Манипула FSR -1 шт.,
- Манипула Intensif - 1 шт.,
- Сменная стерильная насадка для манипулы FSR - 10шт.,
- Сменная стерильная насадка для манипулы Intensif - 10шт.,
- Педаль – 1 шт.,
- USB-ключ – 2 шт.,
- Набор для заливки дистиллированной воды (шланг с воронкой) – 1 шт.,
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Основной блок

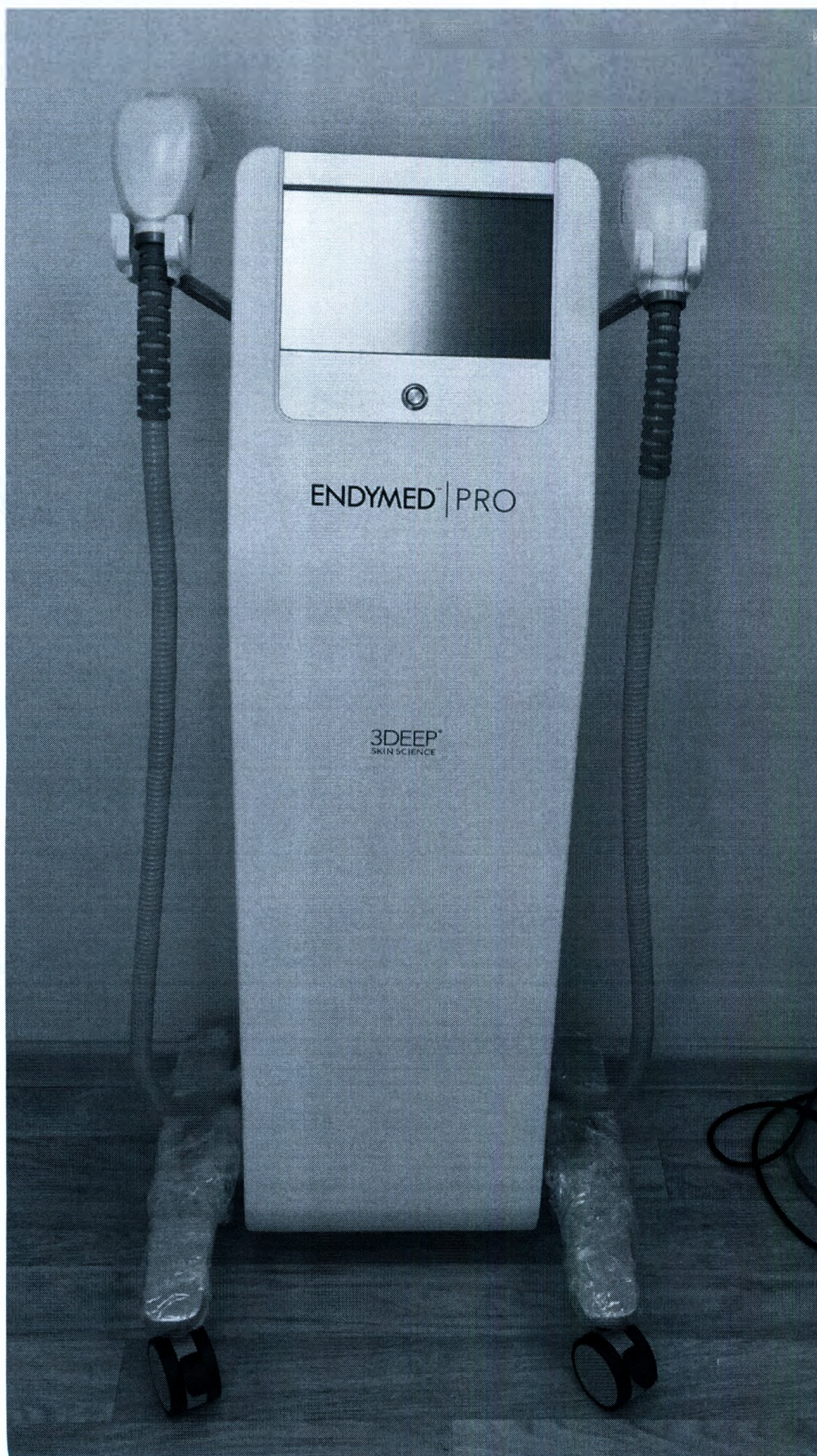

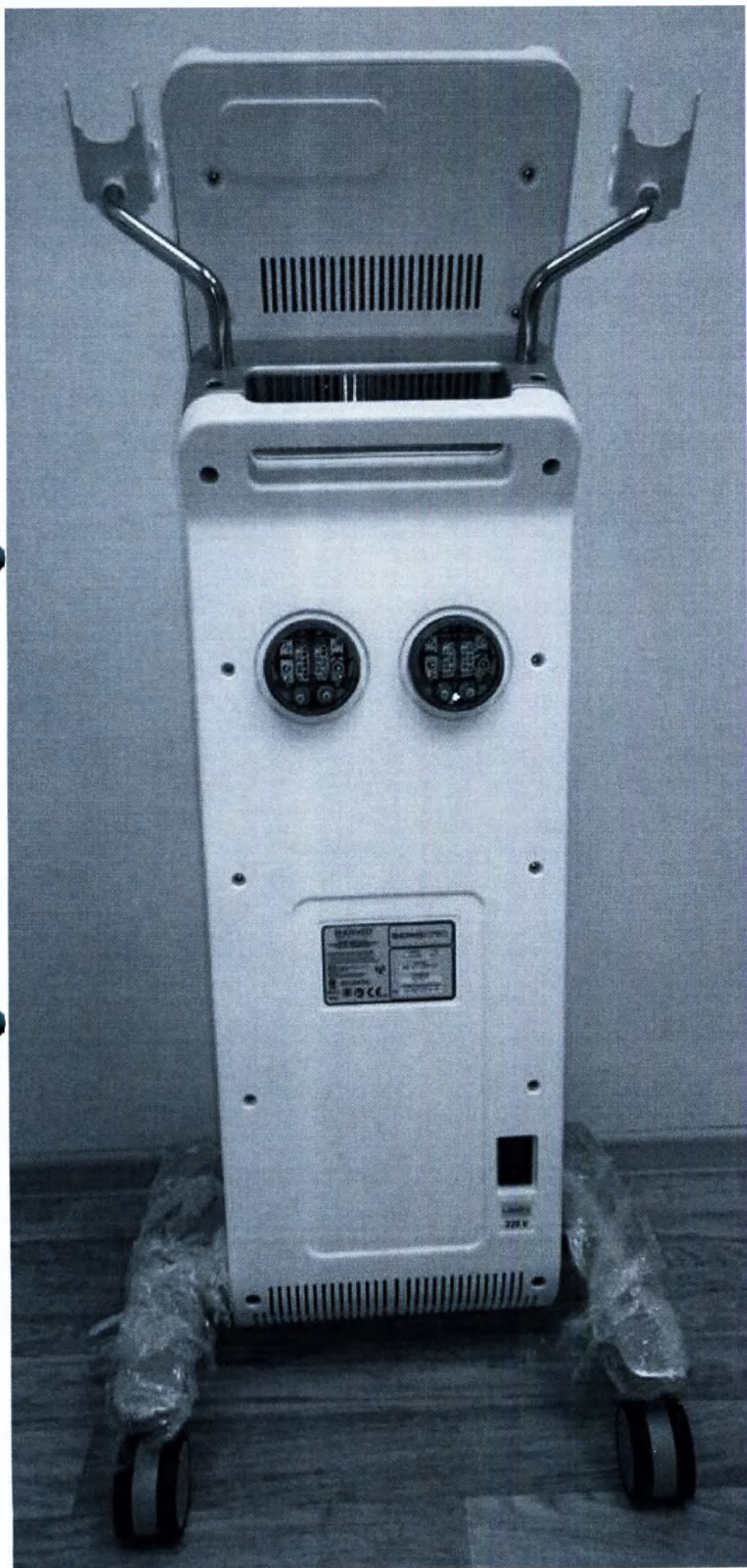

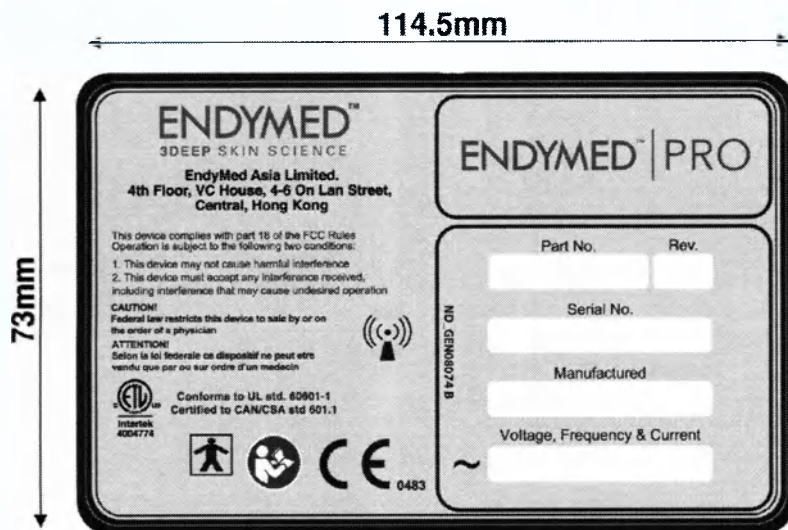


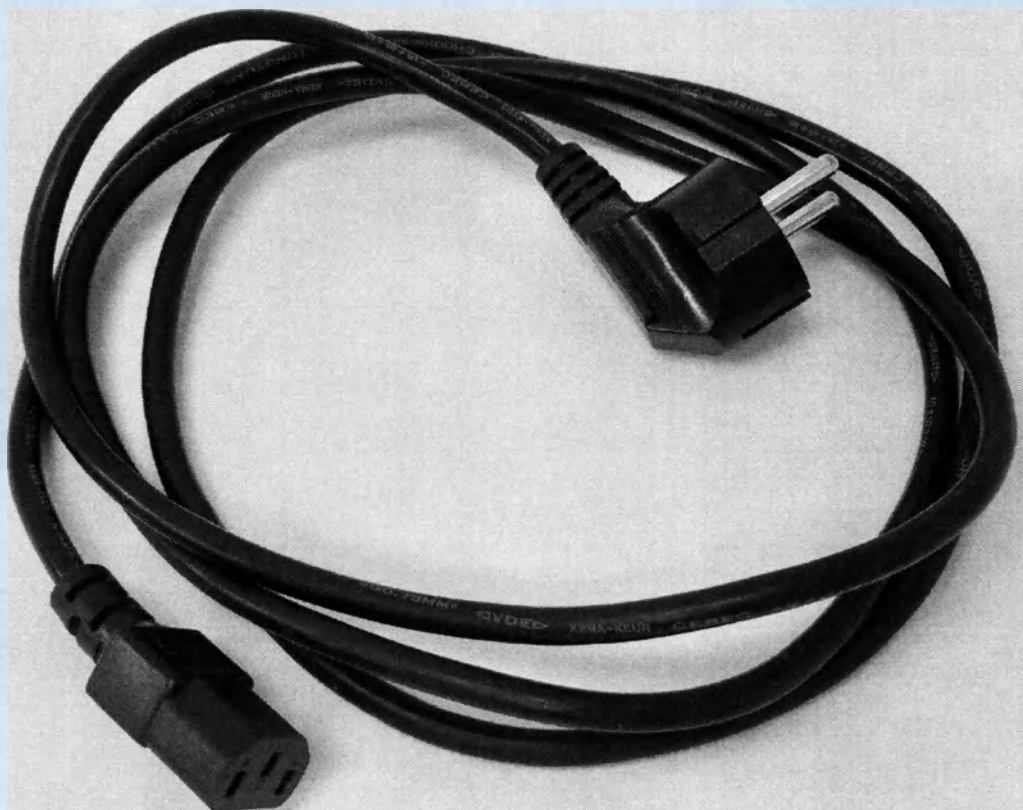

Принадлежности:


Манипула iFine



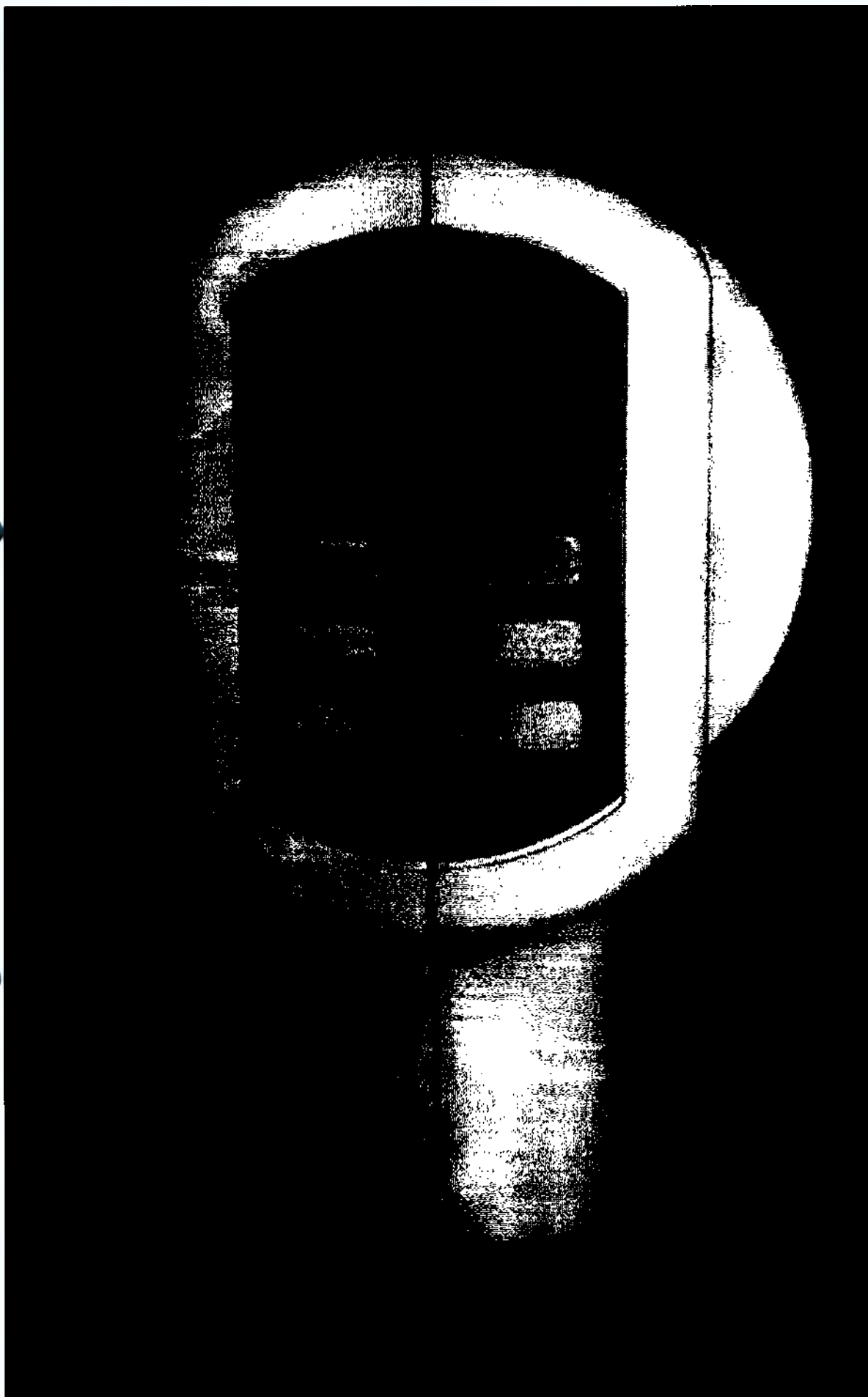

Манипула Small




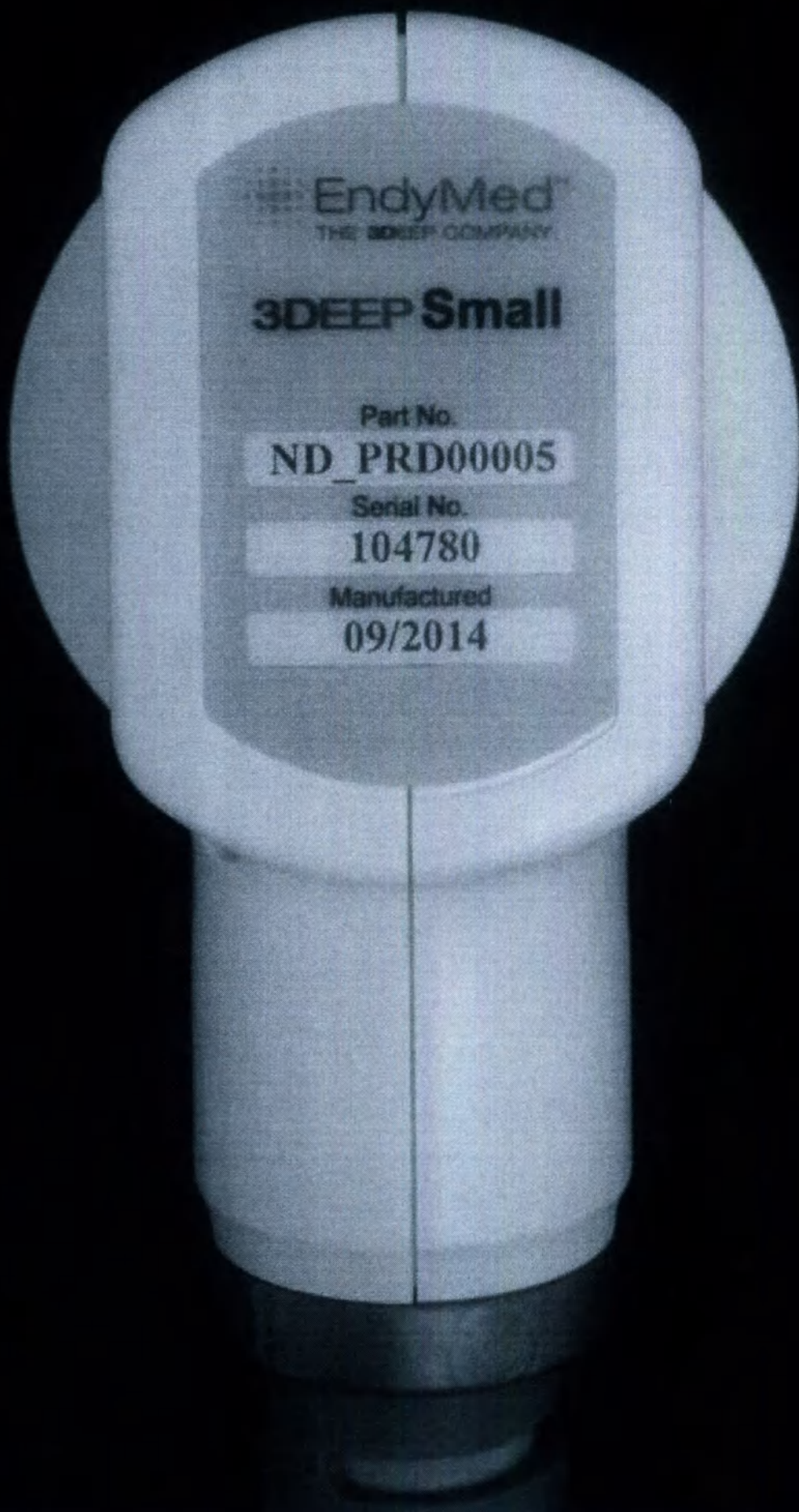








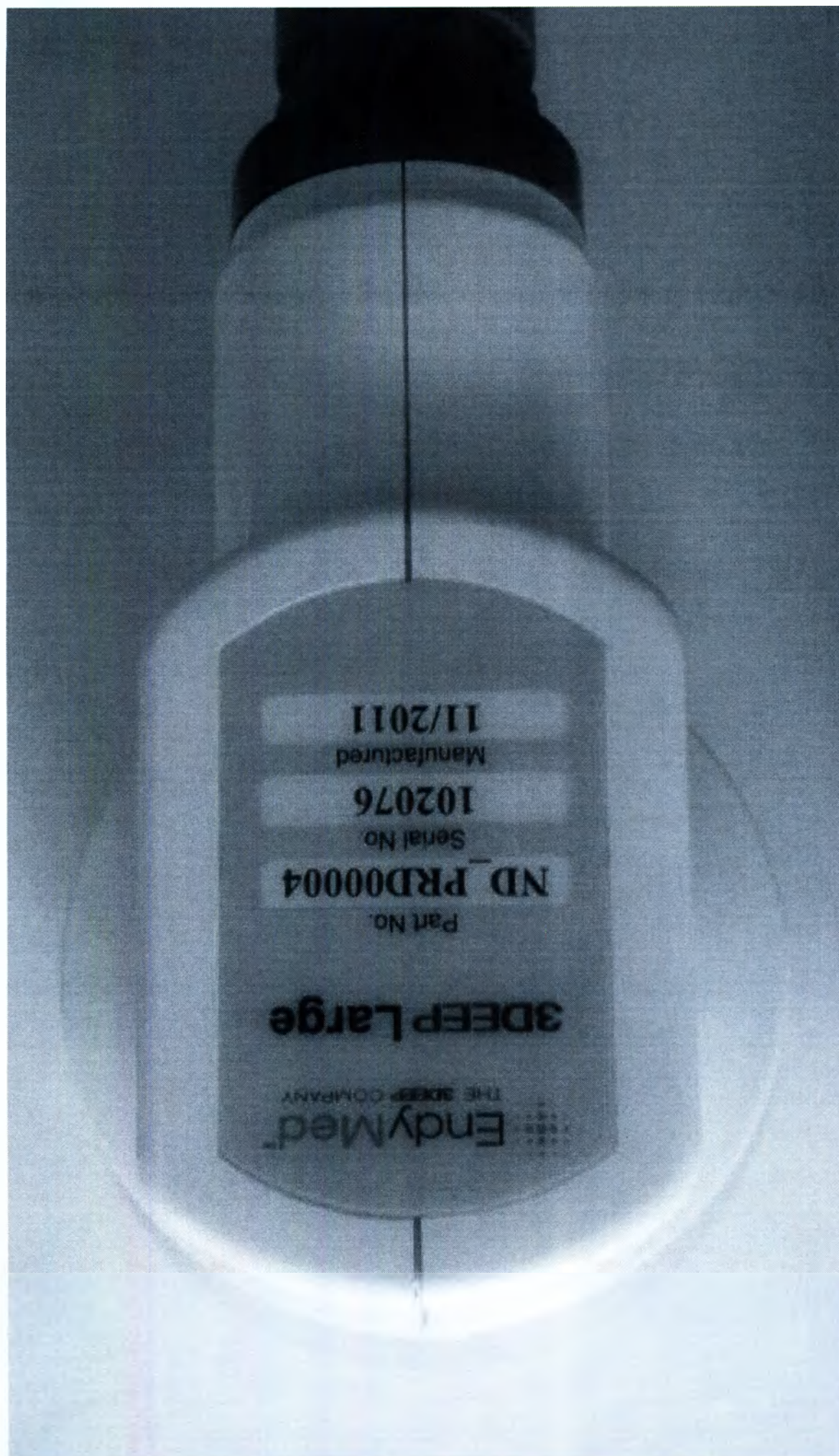



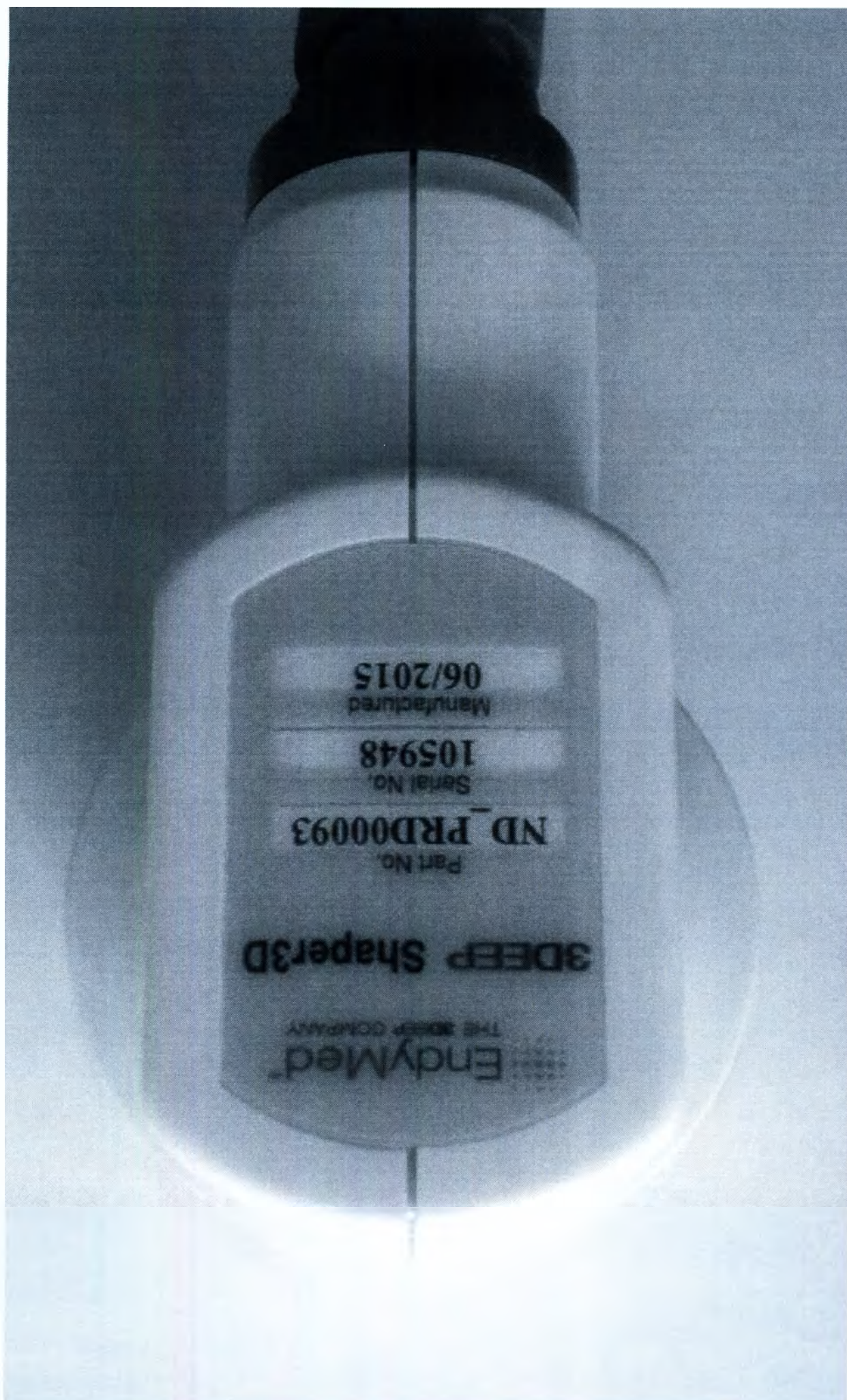



3DEEP
SKIN SCIENCE

ENDYMED | Contour

Part No.

ND_PRD00180

Serial No.

S/N:


UN-2016400025




Manufactured

09/2016



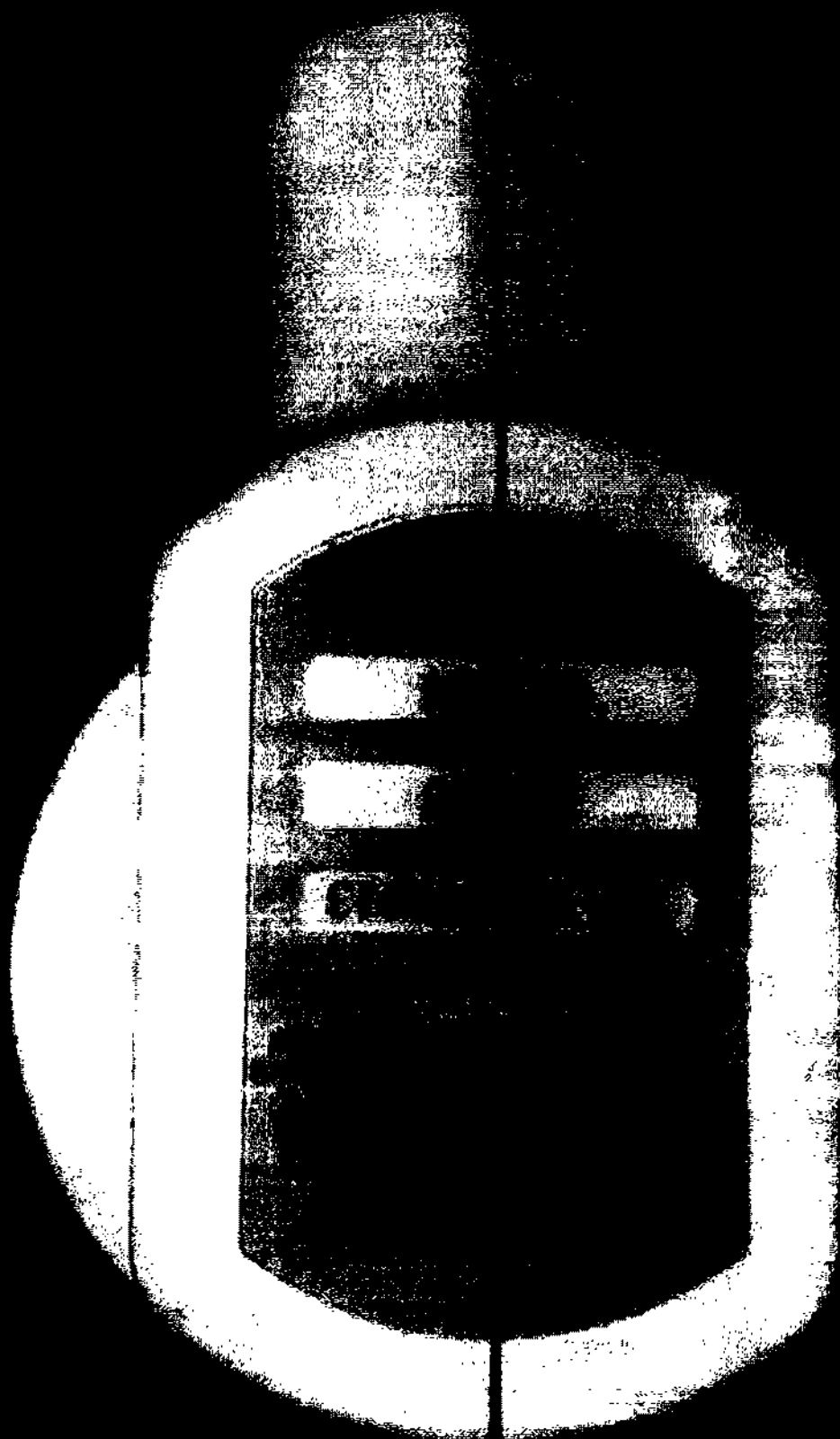



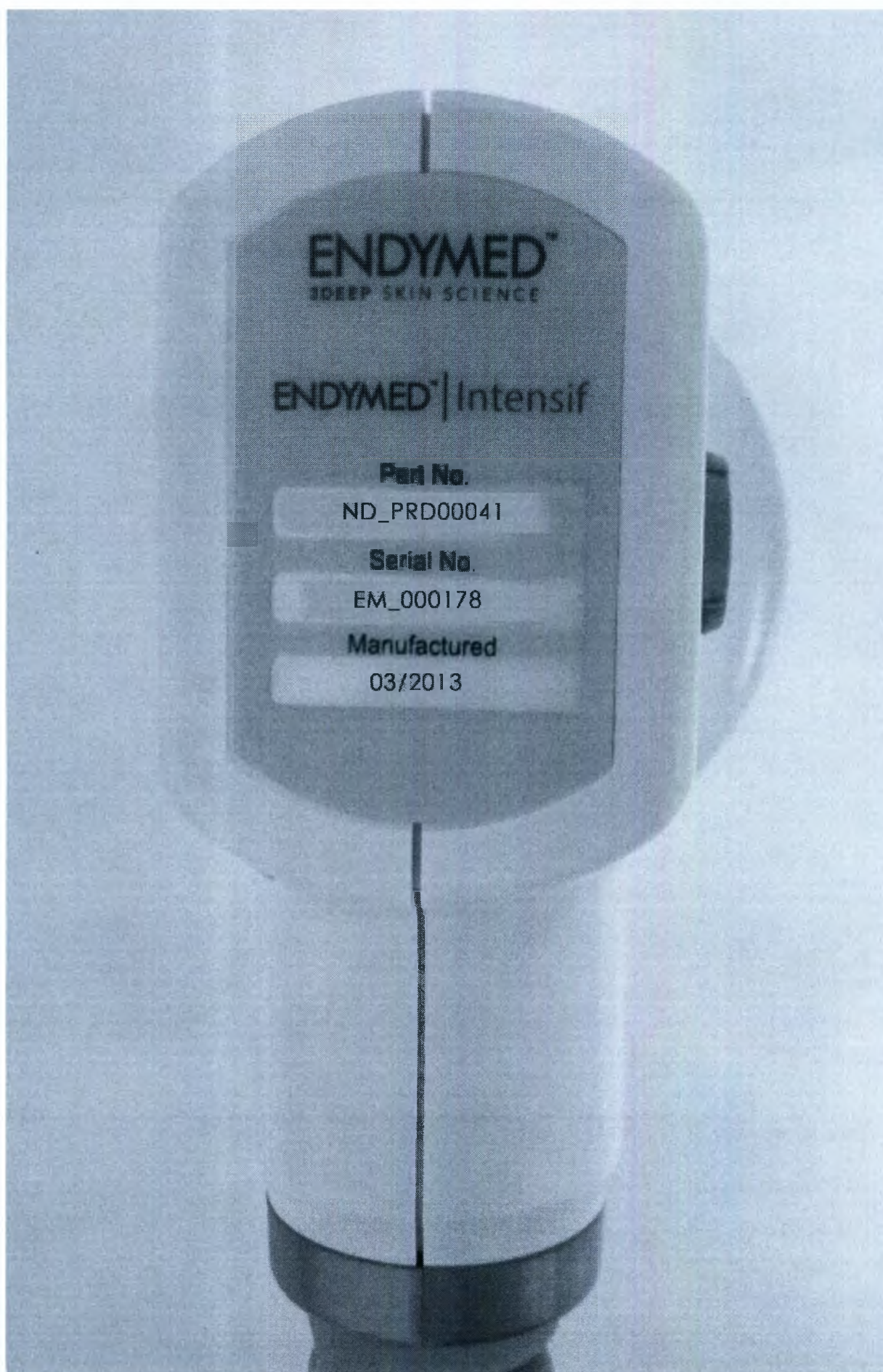



10 Treatment Tips for the FSR Handpiece



up to

450

pulses per tip

EndyMed™
THE 3DEEP® COMPANY

10 FSR Treatment Templates

The FSR Template enables easy positioning of the FSR Handpiece during treatment to ensure uniform coverage of treatment area.

1. Place the Template on the standard treatment area.
2. Use a light, oil-free make-up base and a small sponge to spread the make-up through the Template holes, creating a uniform matrix grid on the skin.
3. Position one corner of the lower edge of the FSR tip on one of the outside dots of the grid, so the surface of the tip covers the first area to be treated. Deliver pulse.
4. Lift the FSR Handpiece and position the water tip corner on the next grid dot so that the lower edge of the tip covers the next area. Deliver pulse.
5. Repeat Step 4 for full and uniform coverage of treatment area.

Treatment Tip

Fractional Skin Resurfacing Handpiece

ENDYMED™

Please read the instructions carefully before use.

CE
0483

STERILE EO

12 Leshem St. Caesarea,
3066900, Israel

Do not use if
package is damaged.

02/2016

052016

02/2018

Treatment Tip

Fractional Skin Resurfacing Handpiece

ENDYMED™

Please read the instructions carefully before use.

CE
0483

STERILE EO


12 Leshem St. Caesarea,
3066900, Israel

Do not use if
package is damaged.


02/2016

052016


02/2018

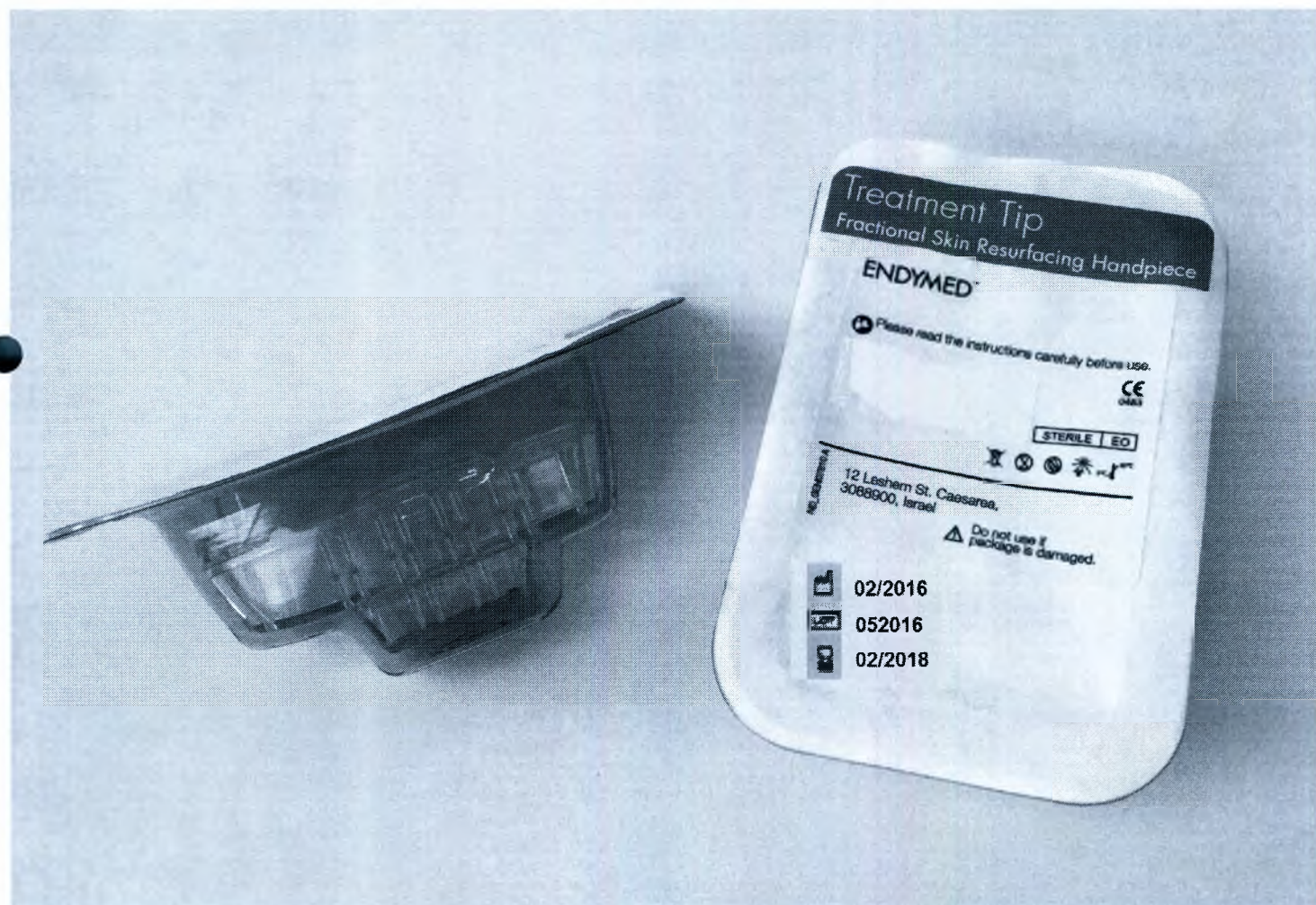

Сменная стерильная насадка для манипулы Intensif

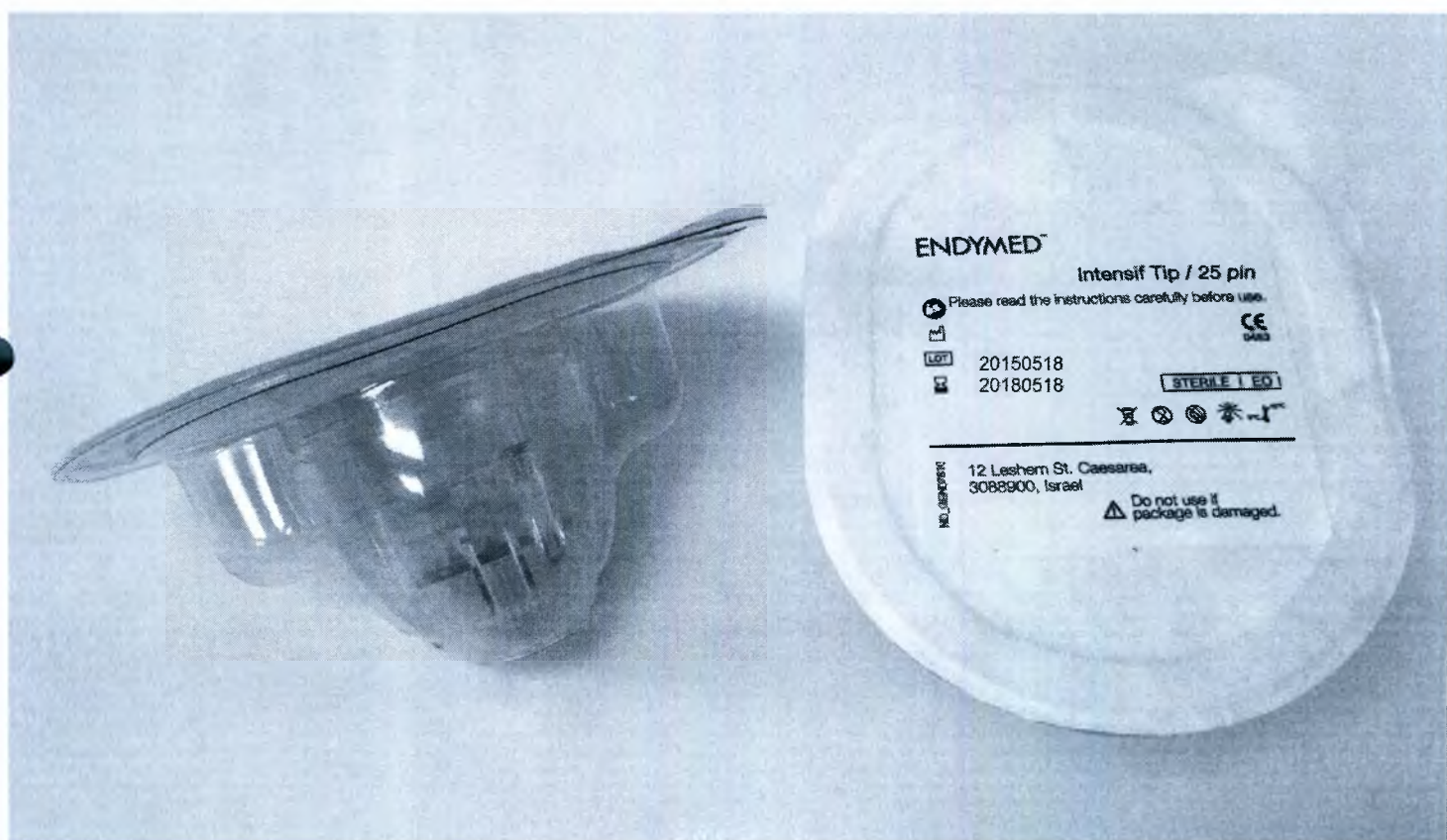


Педаль

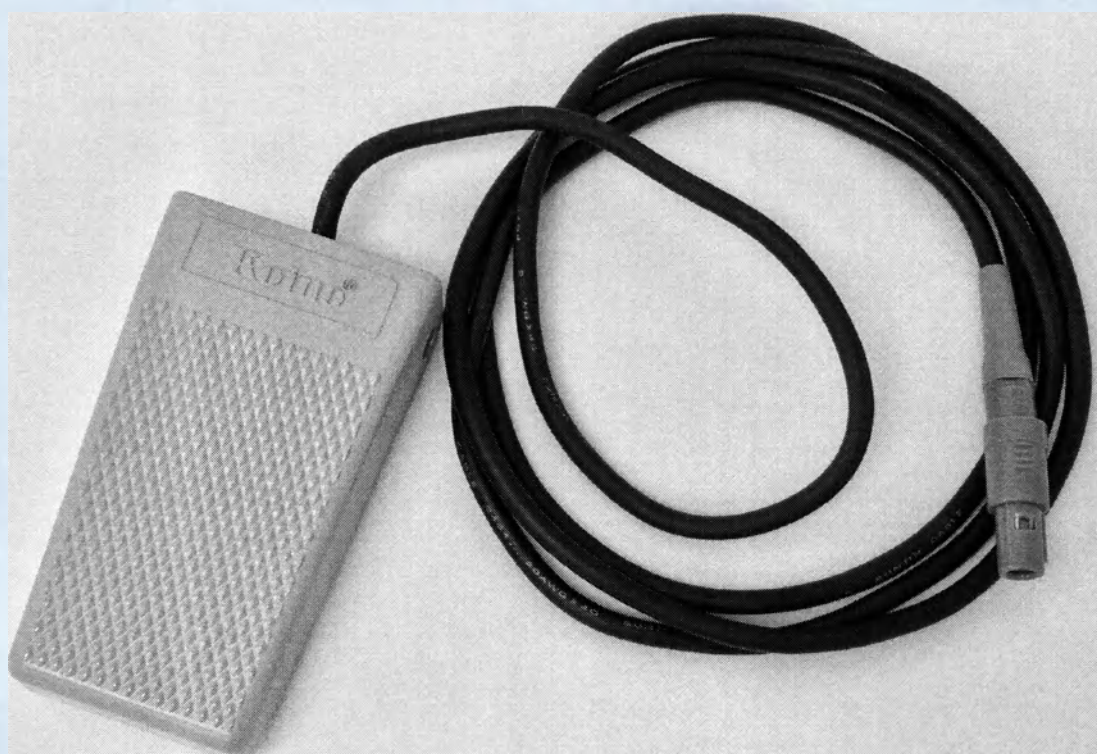

USB-КЛЮЧ



Набор для заливки дистиллированной воды (шланг с воронкой)

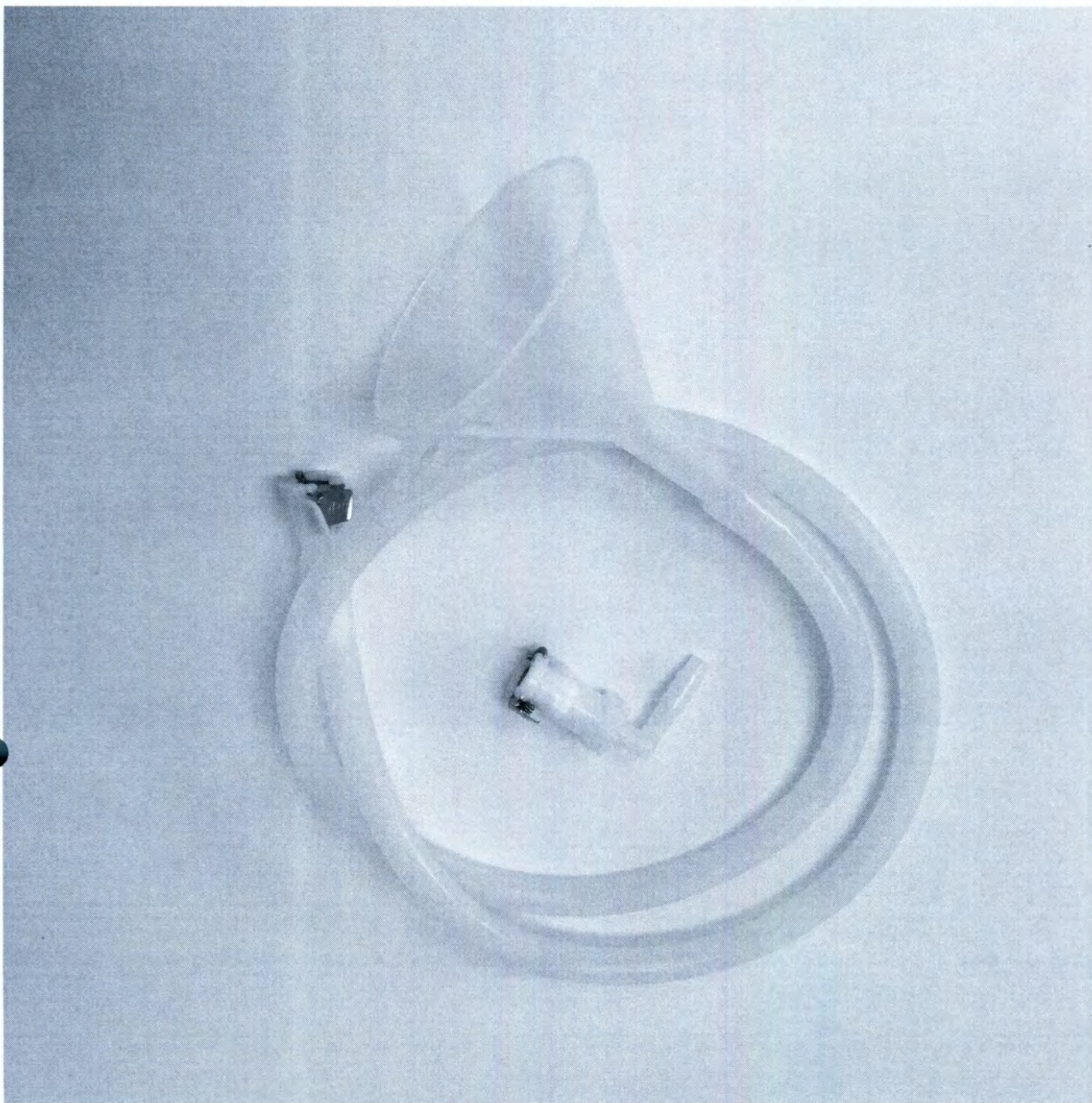

EndyMed PURE, в составе:

- основной блок – 1 шт.
- сетевой кабель – 1 шт.


Принадлежности:

- Манипула iFine -1 шт.,
- Манипула Small -1 шт.,
- Манипула MiniShaper -1 шт.,
- Манипула Large -1 шт.,
- Манипула Shaper 3D -1 шт.,
- Манипула FSR -1 шт.,
- Манипула Intensif - 1 шт.,
- Сменная стерильная насадка для манипулы FSR - 10шт.,
- Сменная стерильная насадка для манипулы Intensif - 10шт.,
- Педаль – 1 шт.,
- USB-ключ – 2 шт.,
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Основной блок





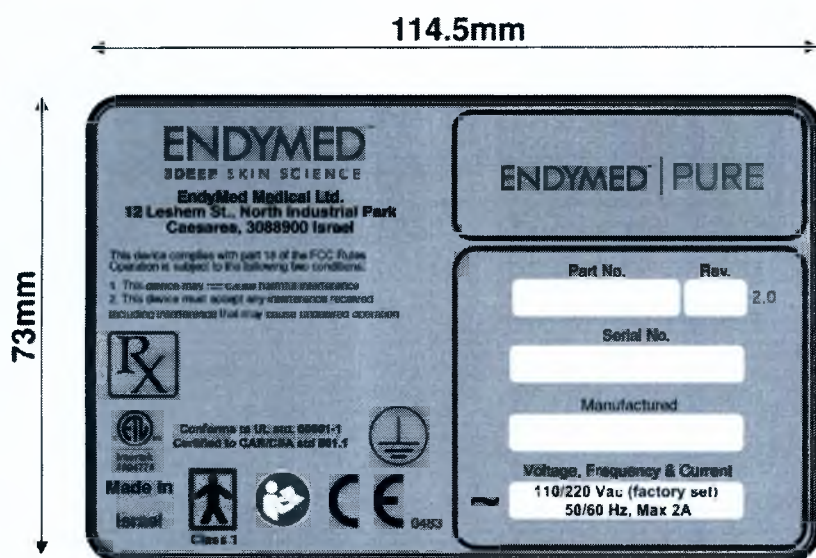

сетевой кабель



Принадлежности:


Манипула iFine






Манипула Small:



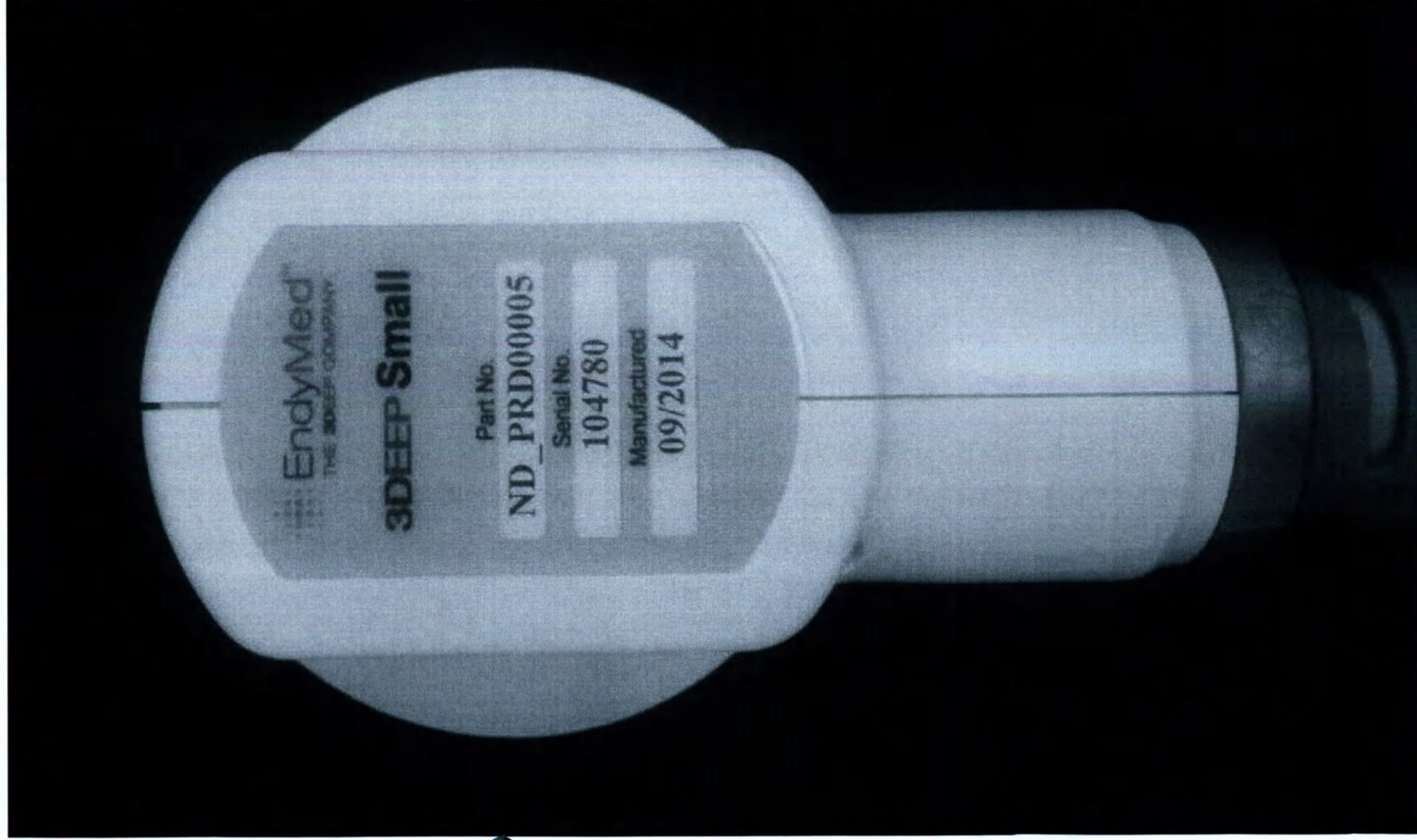


Манипула MiniShaper:

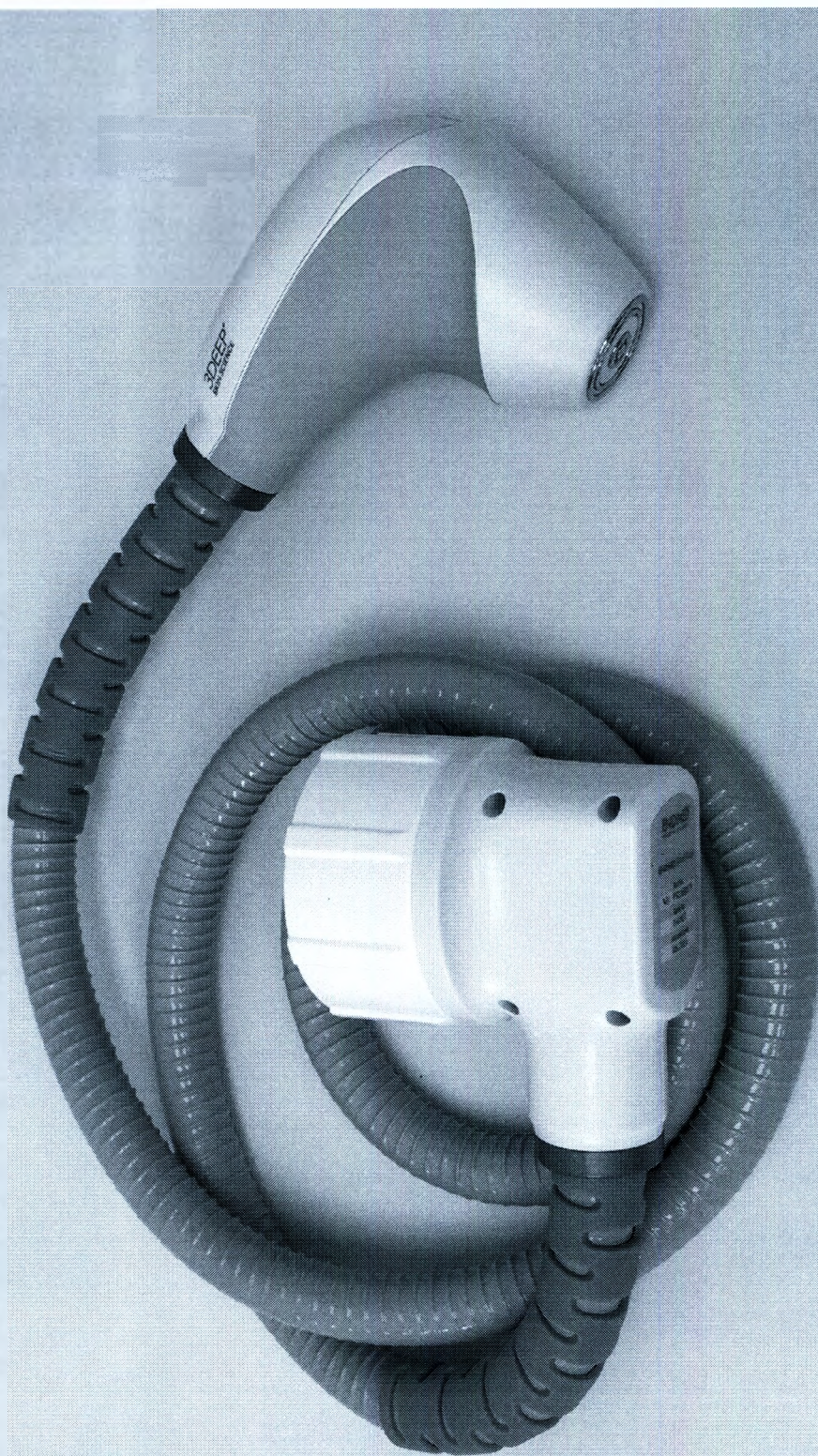




Манипула Large:




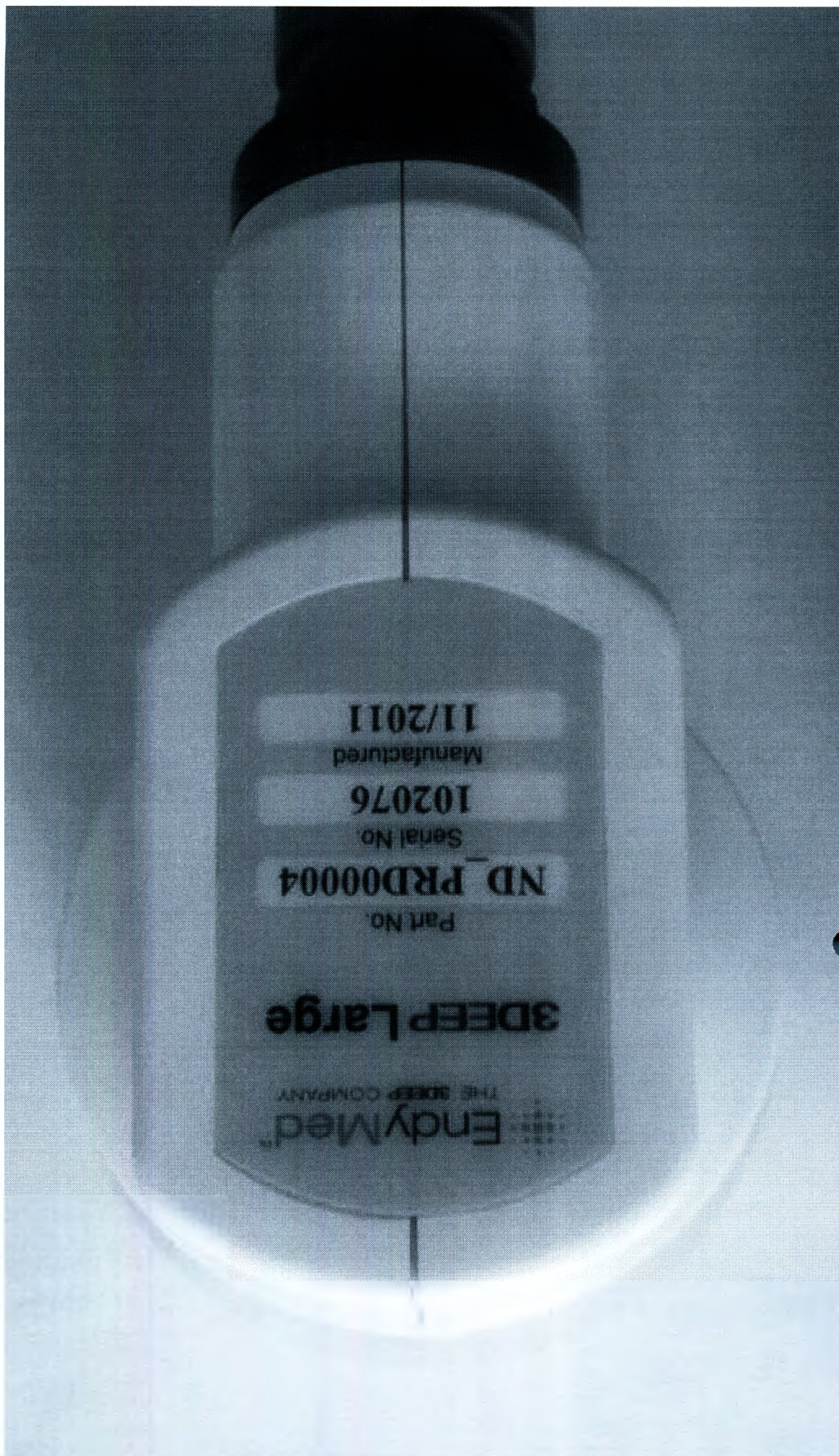




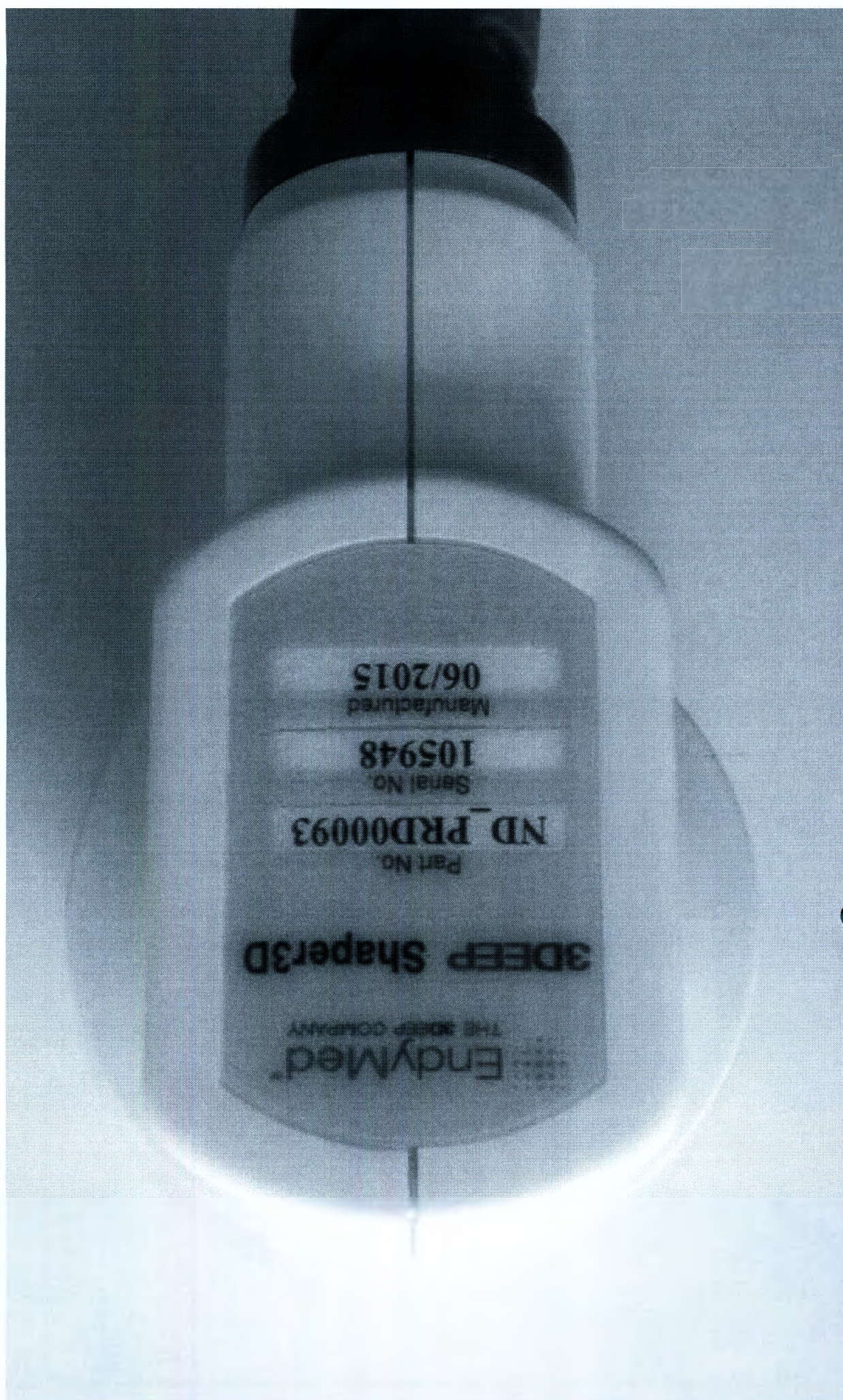



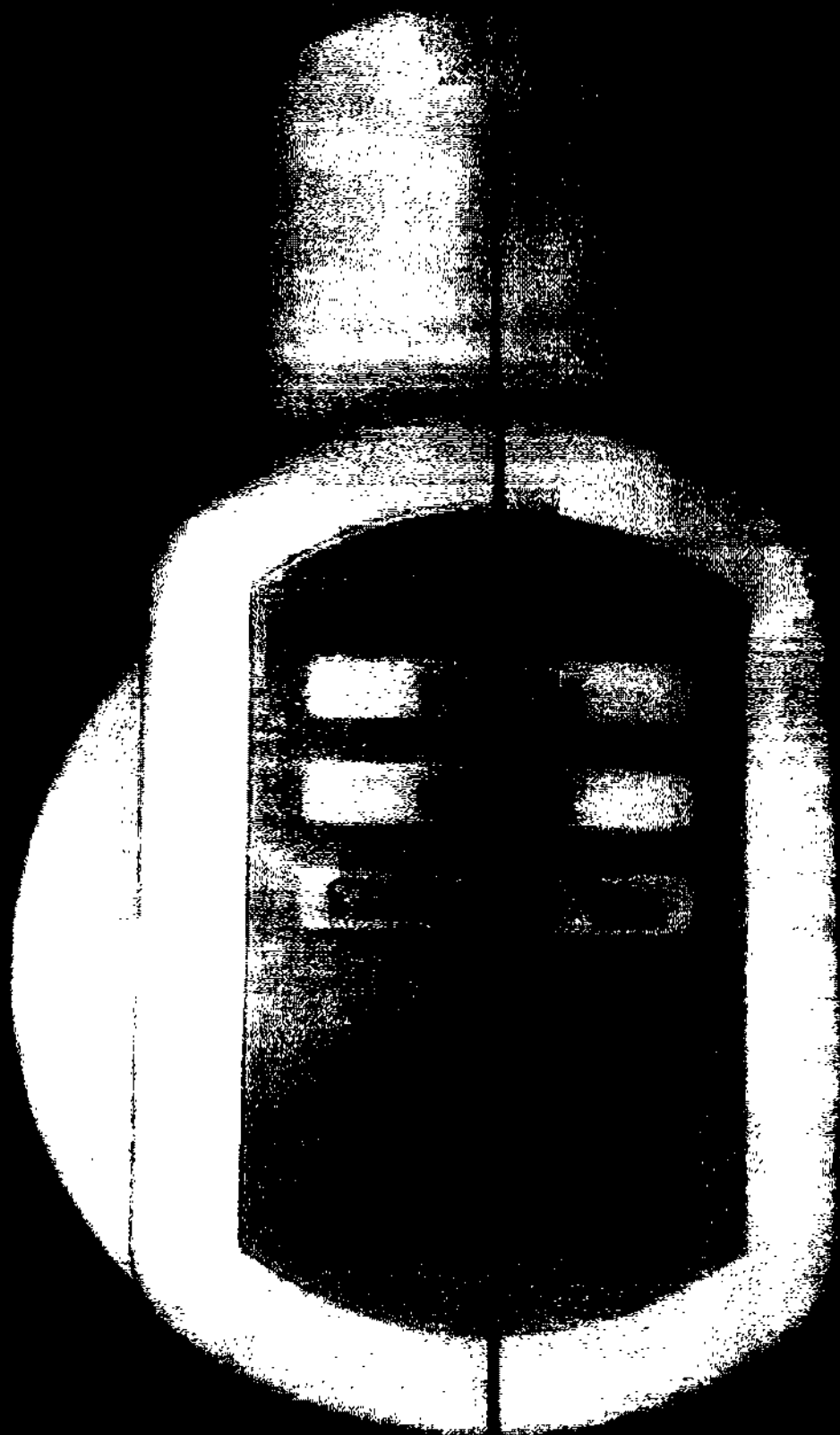



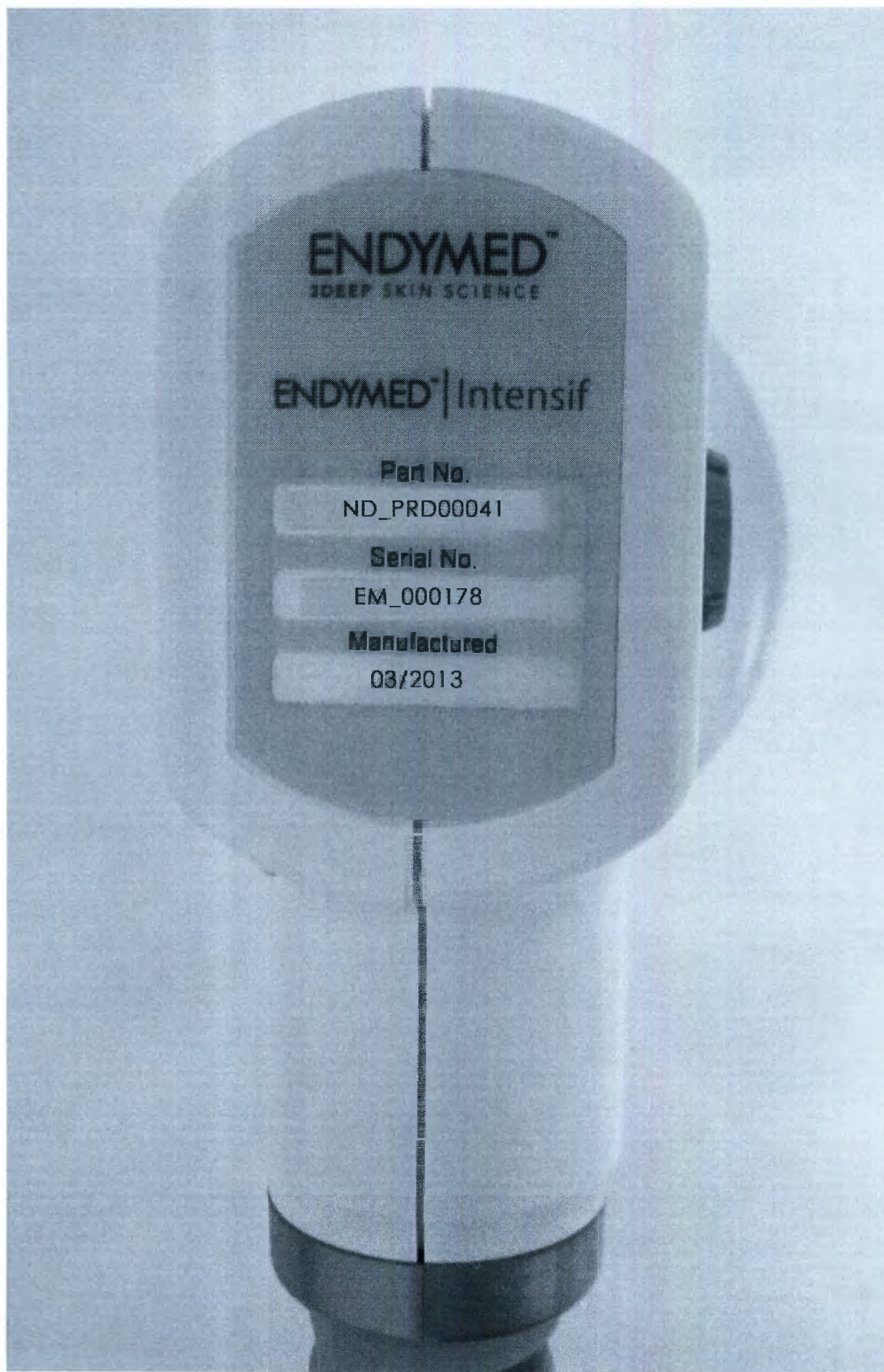

EndyMed™
THE 3DEEP™ COMPANY

10 Treatment Tips for the FSR Handpiece

up to **450** pulses per tip





EndyMed™
THE 3DEEP™ COMPANY

10 FSR Treatment Templates



The FSR Template enables easy positioning of the FSR Handpiece during treatment to ensure uniform coverage of treatment area.

1. Place the Template on the intended treatment area.
2. Use a light, oil-free makeup base and a small sponge to spread the makeup through the template holes, creating a uniform matrix grid on the skin.
3. Position one corner of the lower edge of the FSR tip on one of the outside dots of the grid, so the surface of the tip covers the first area to be treated. Deliver pulse.
4. Lift the FSR Handpiece and position the same tip corner on the next grid dot so that the lower edge of the tip now covers the next area. Deliver pulse.
5. Repeat Steps 4 for all and obtain coverage of treatment area.

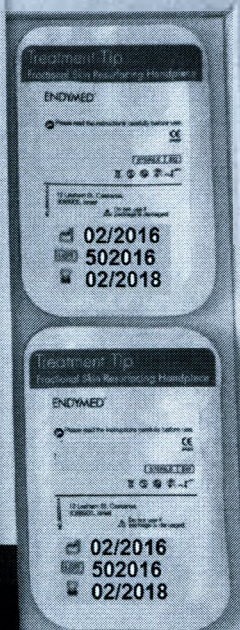

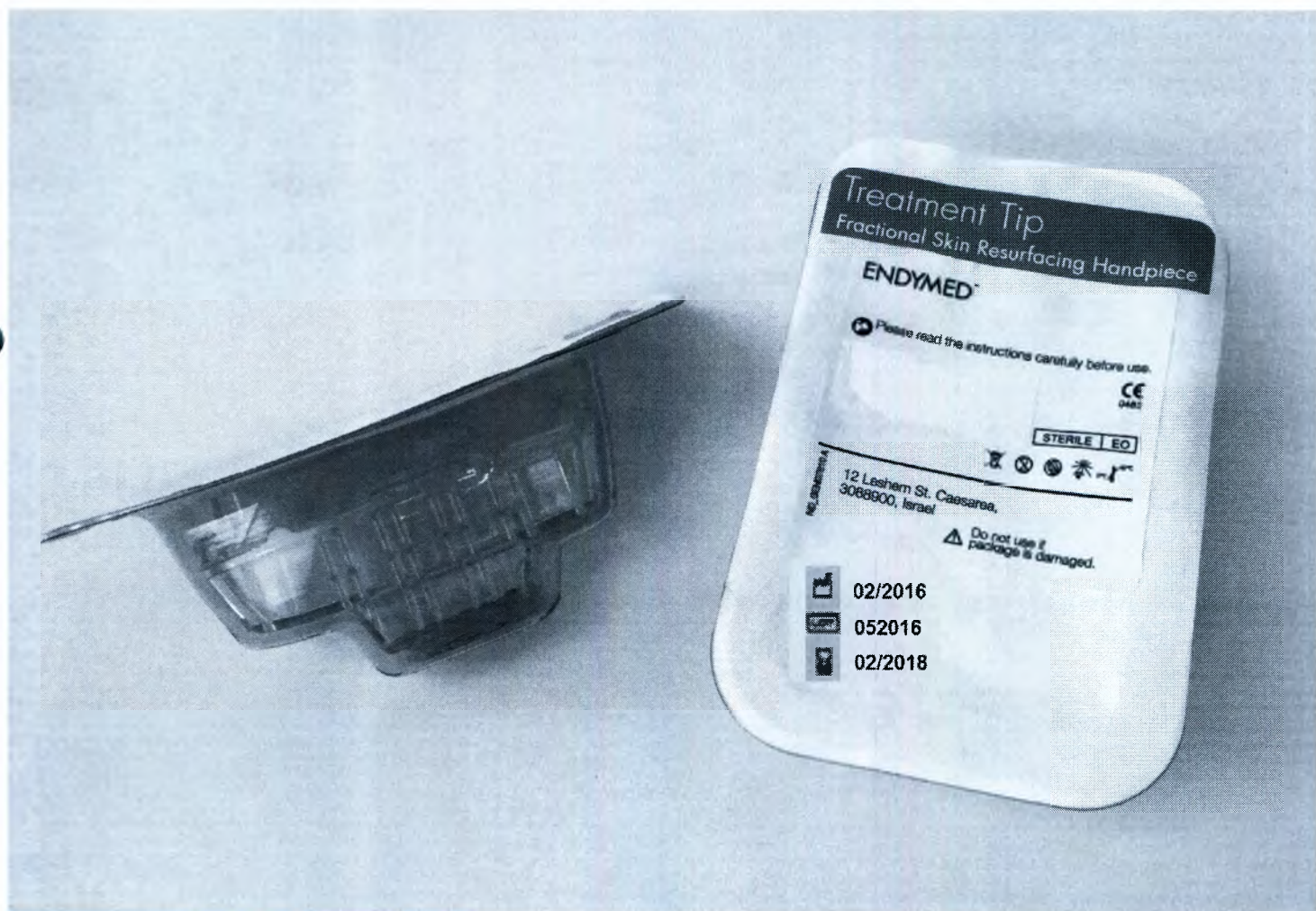

Сменная стерильная насадка для манипулы Intensif

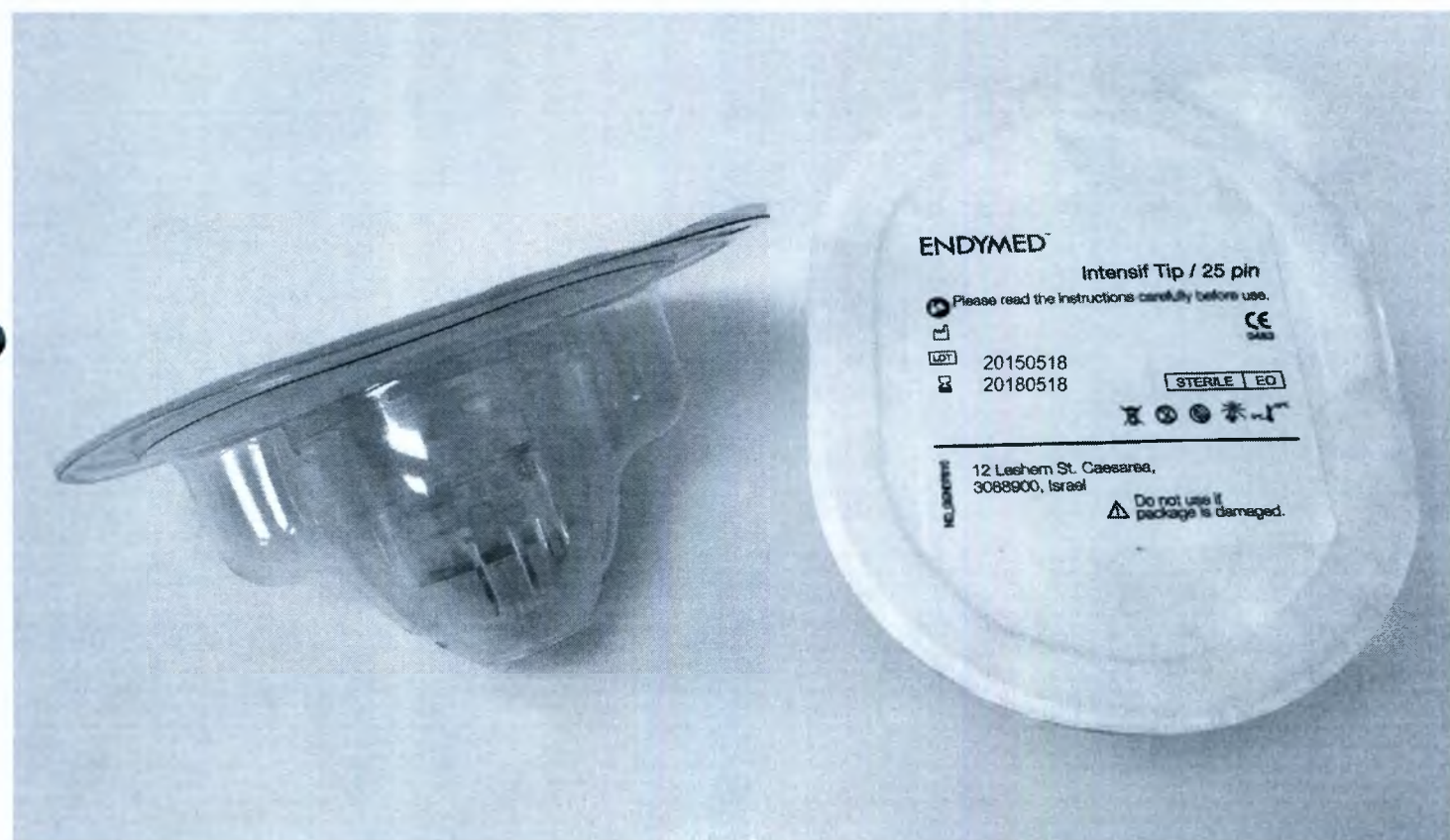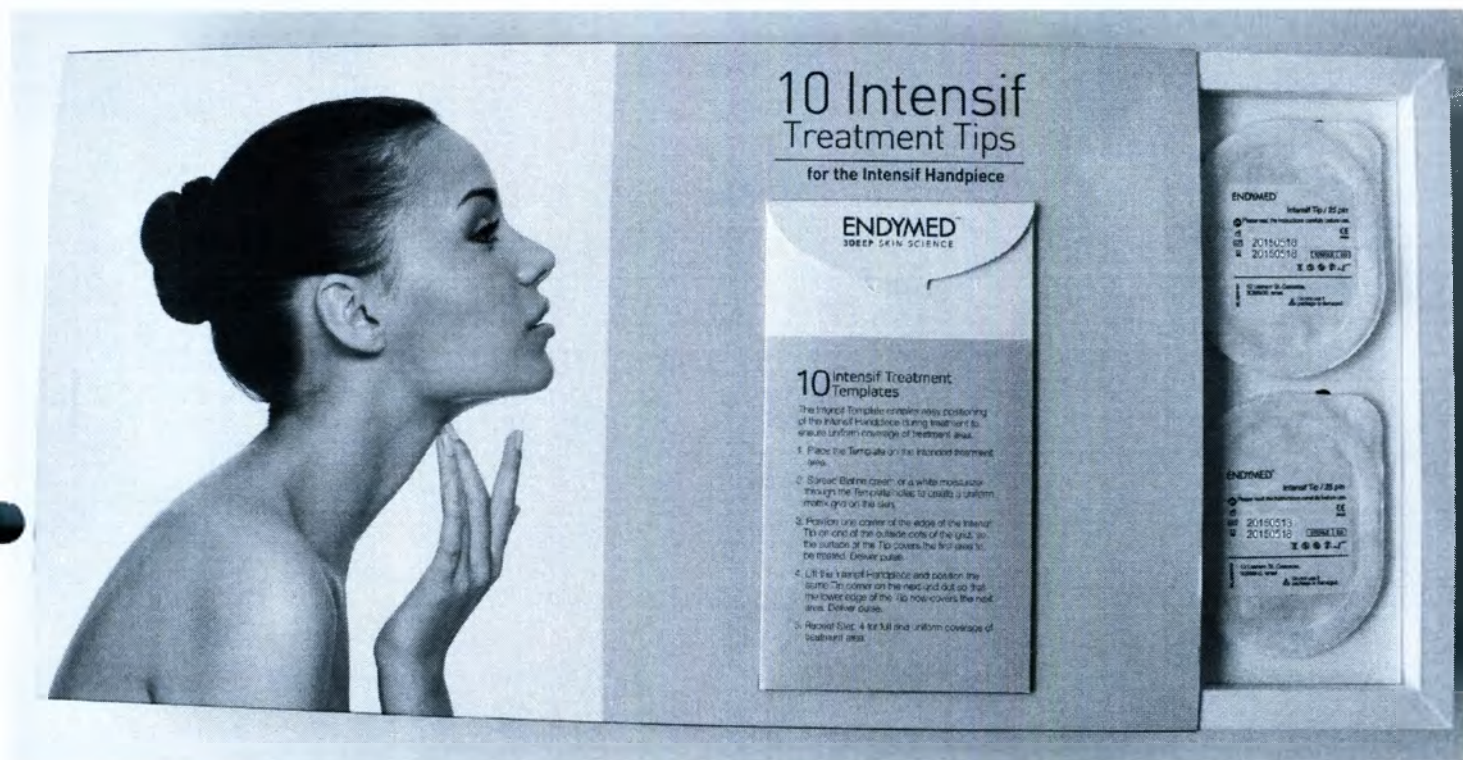

Педаль:



USB- ключ



GLOW by EndyMed, в составе:

- основной блок— 1 шт.
- сетевой кабель— 1 шт.


Принадлежности:


- Манипула iFine -1 шт.,
- Манипула Small - 1 шт.,
- Манипула MiniShaper -1 шт.,
- Манипула Large -1 шт.,
- Манипула Shaper 3D - 1 шт.,
- Манипула FSR -1 шт.,


● Сменная стерильная насадка для манипулы FSR - 10шт.,

- USB-ключ – 2 шт.,
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Основной блок

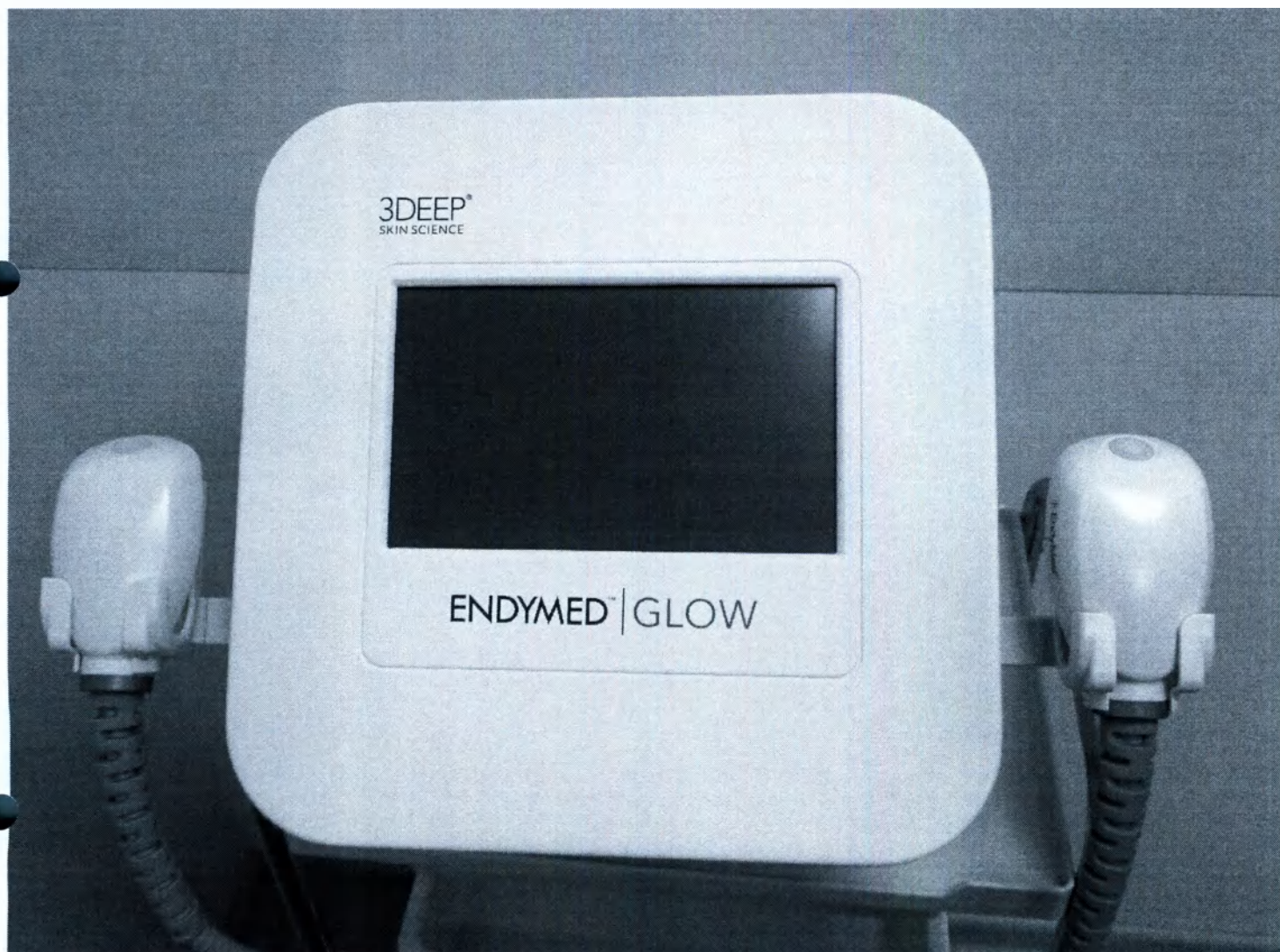

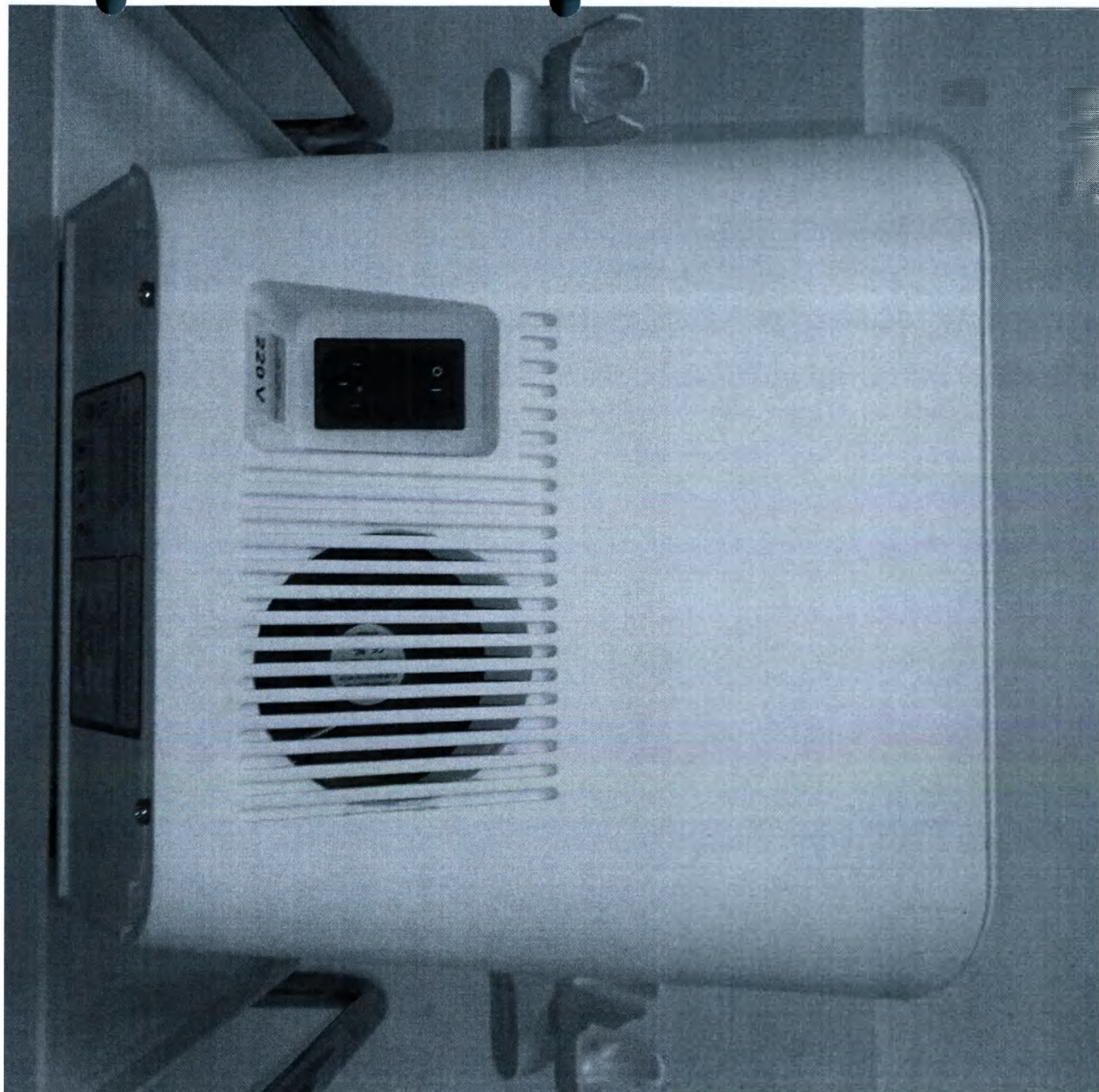

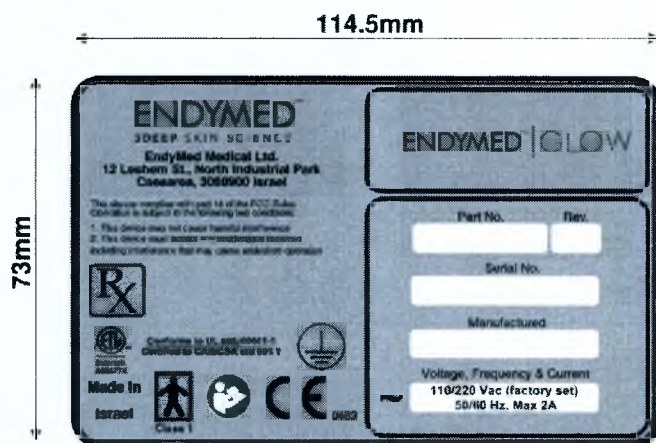

Сетевой кабель:



Принадлежности:

Манипула iFine



 **EndyMed™**
THE 3DEEP COMPANY

3DEEP IFine

Part No.


ND_PRD00036


Serial No.

104343


Manufactured


03/2014

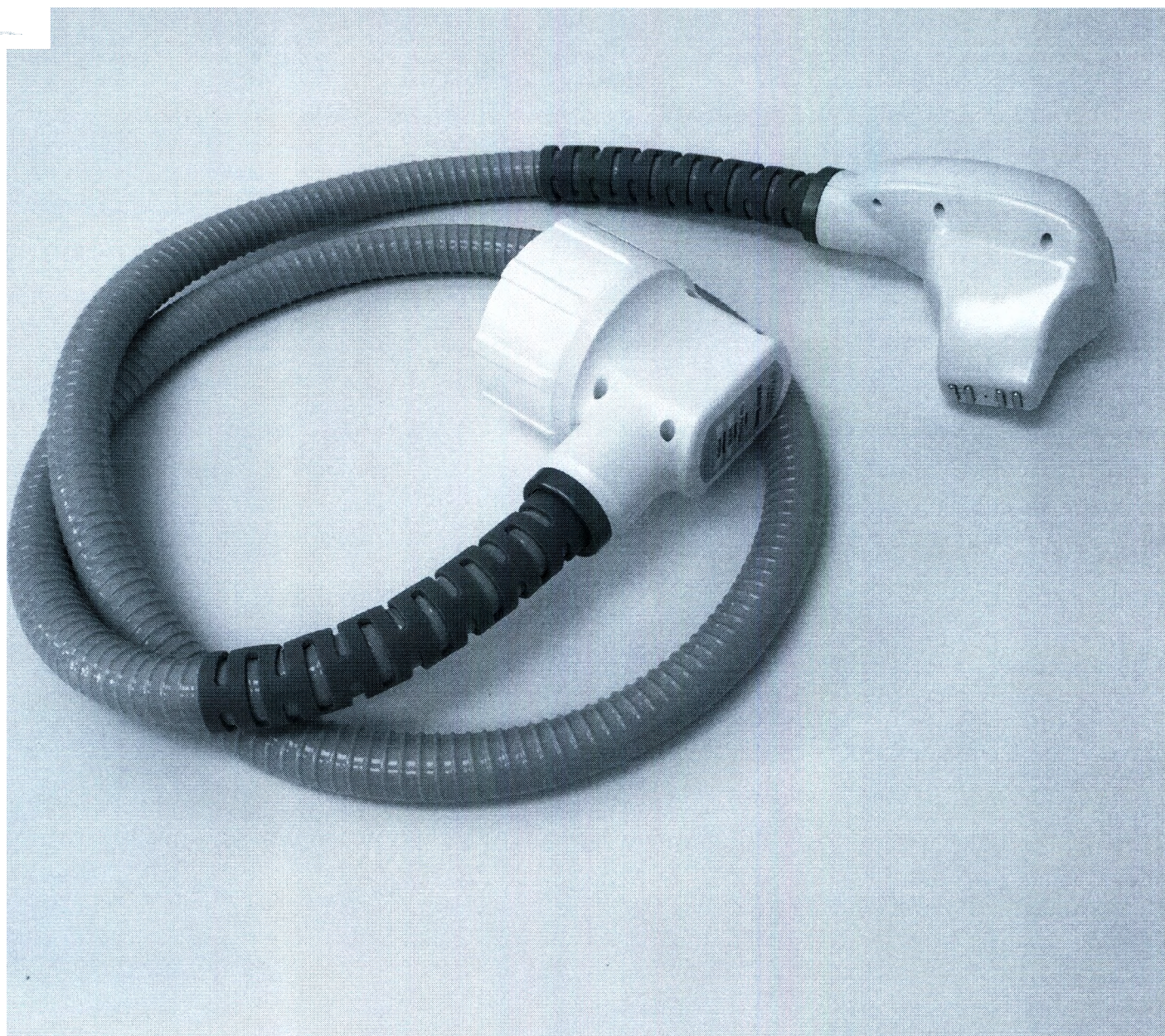


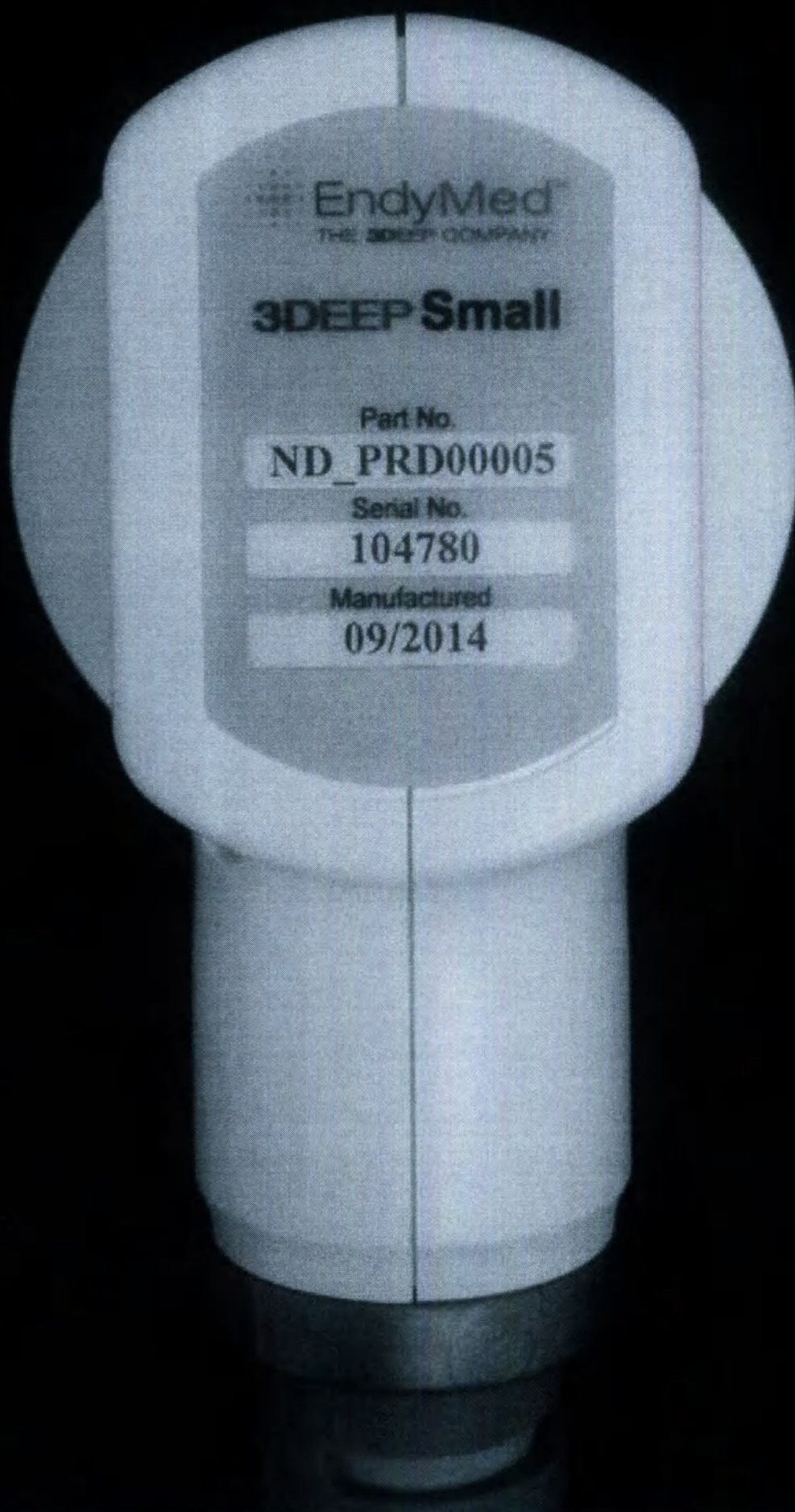





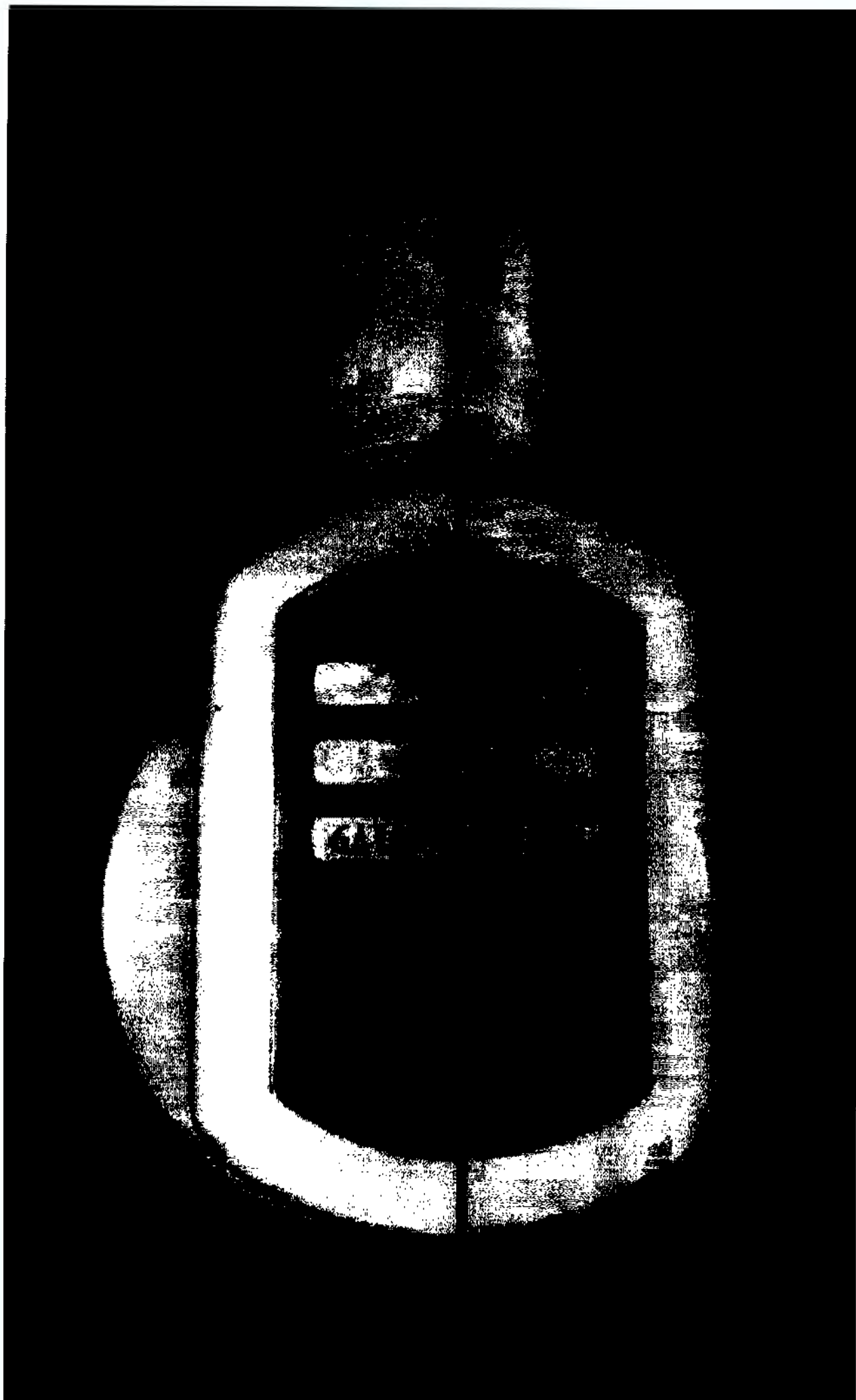


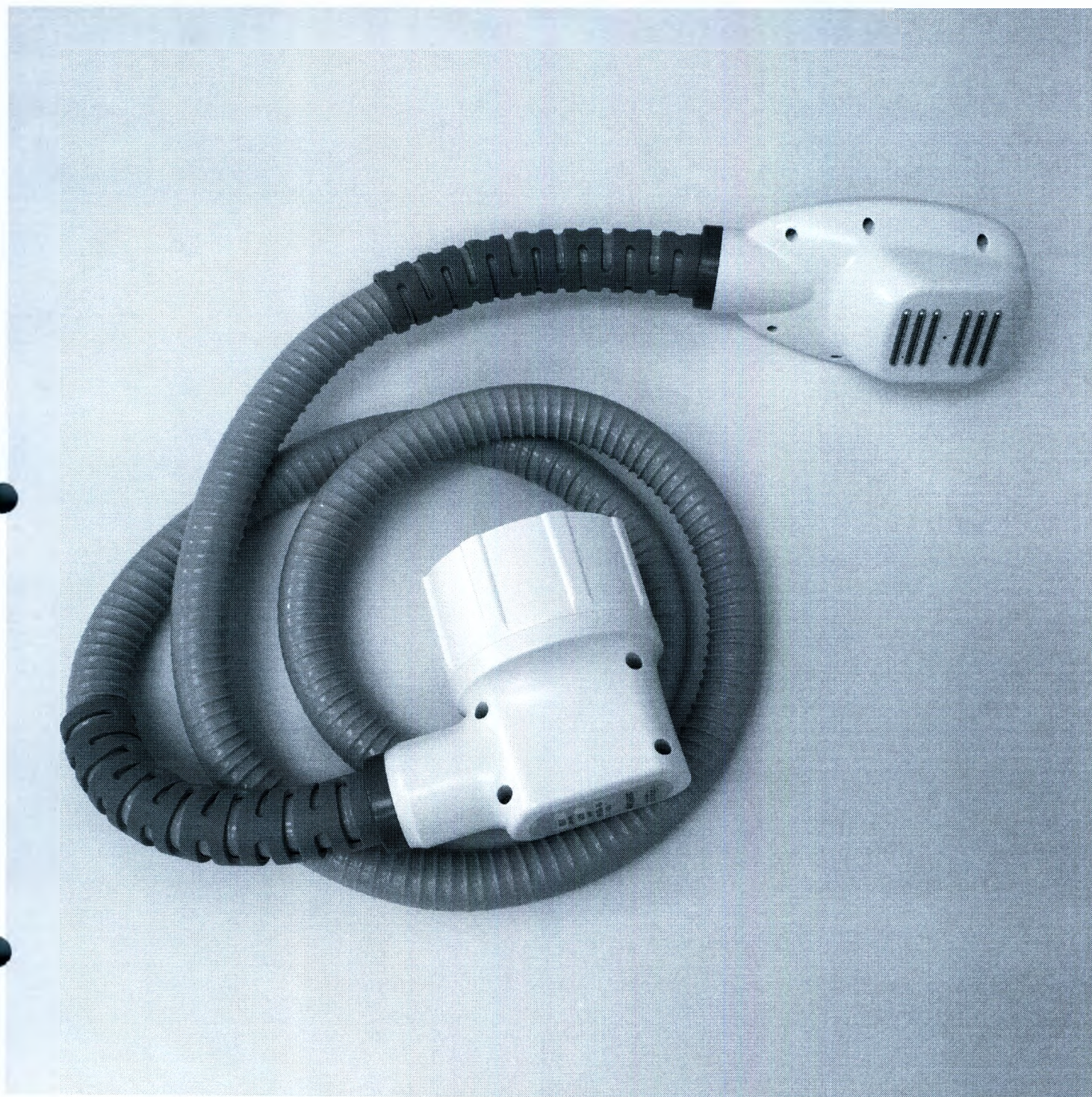


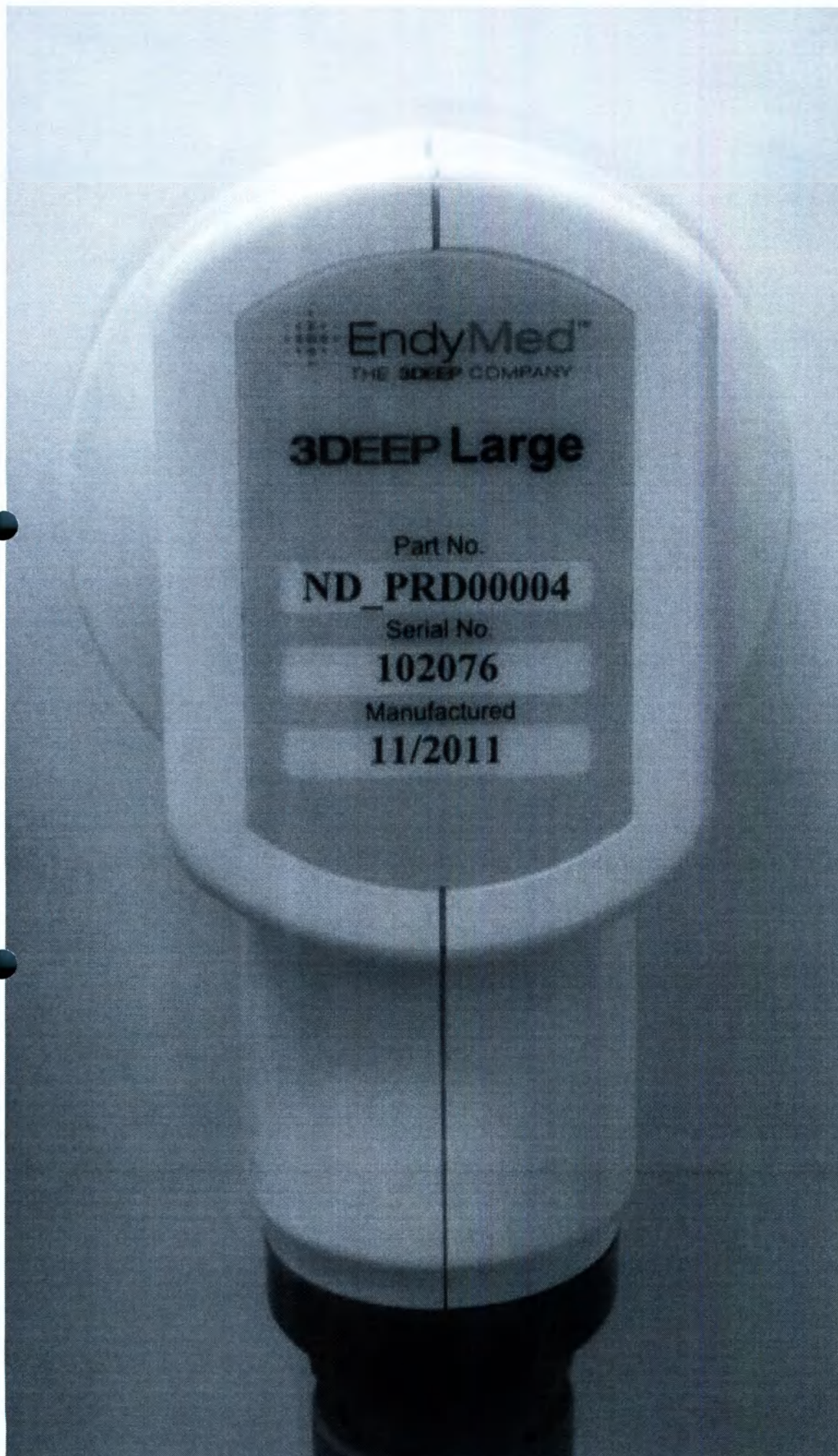

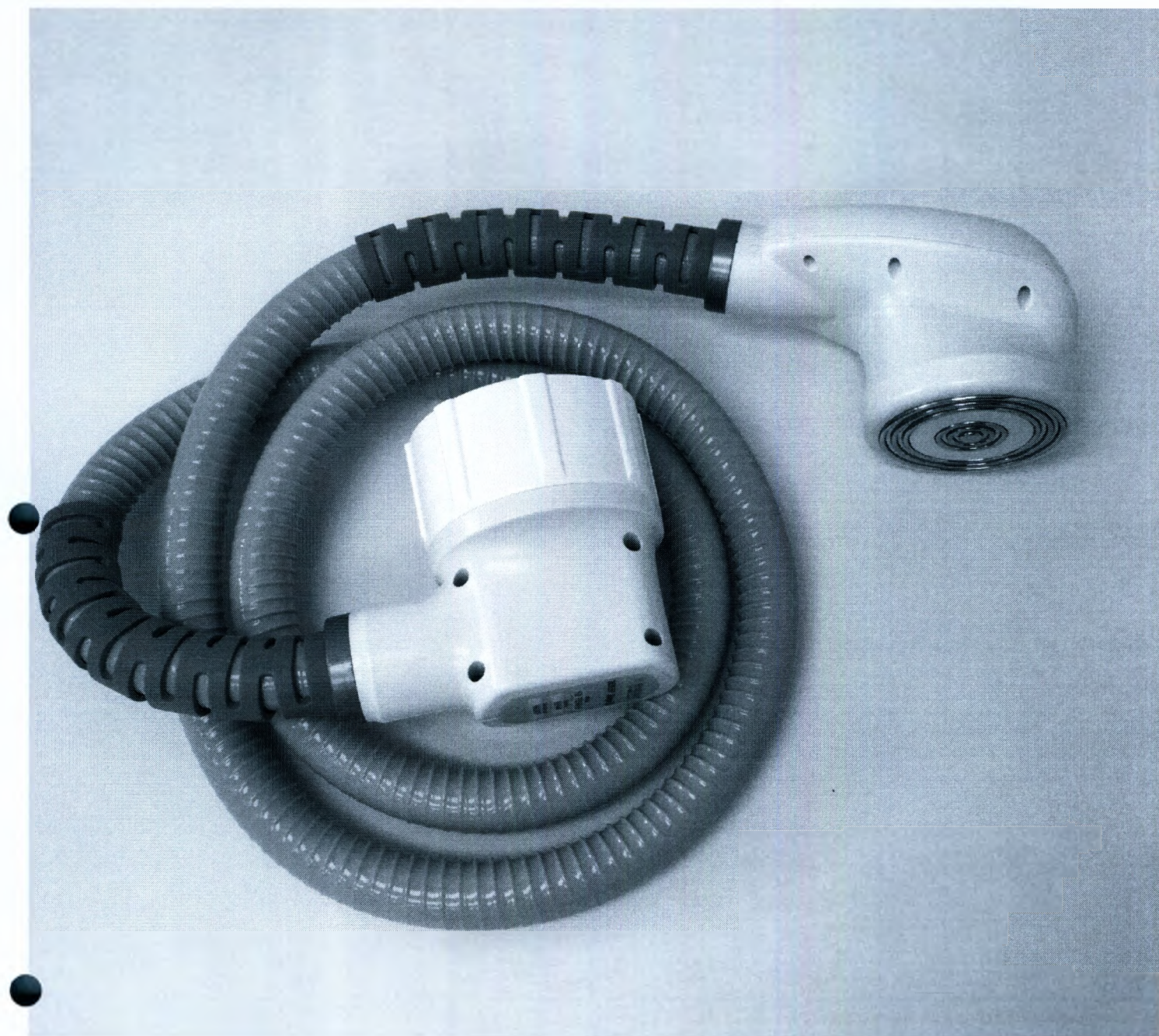

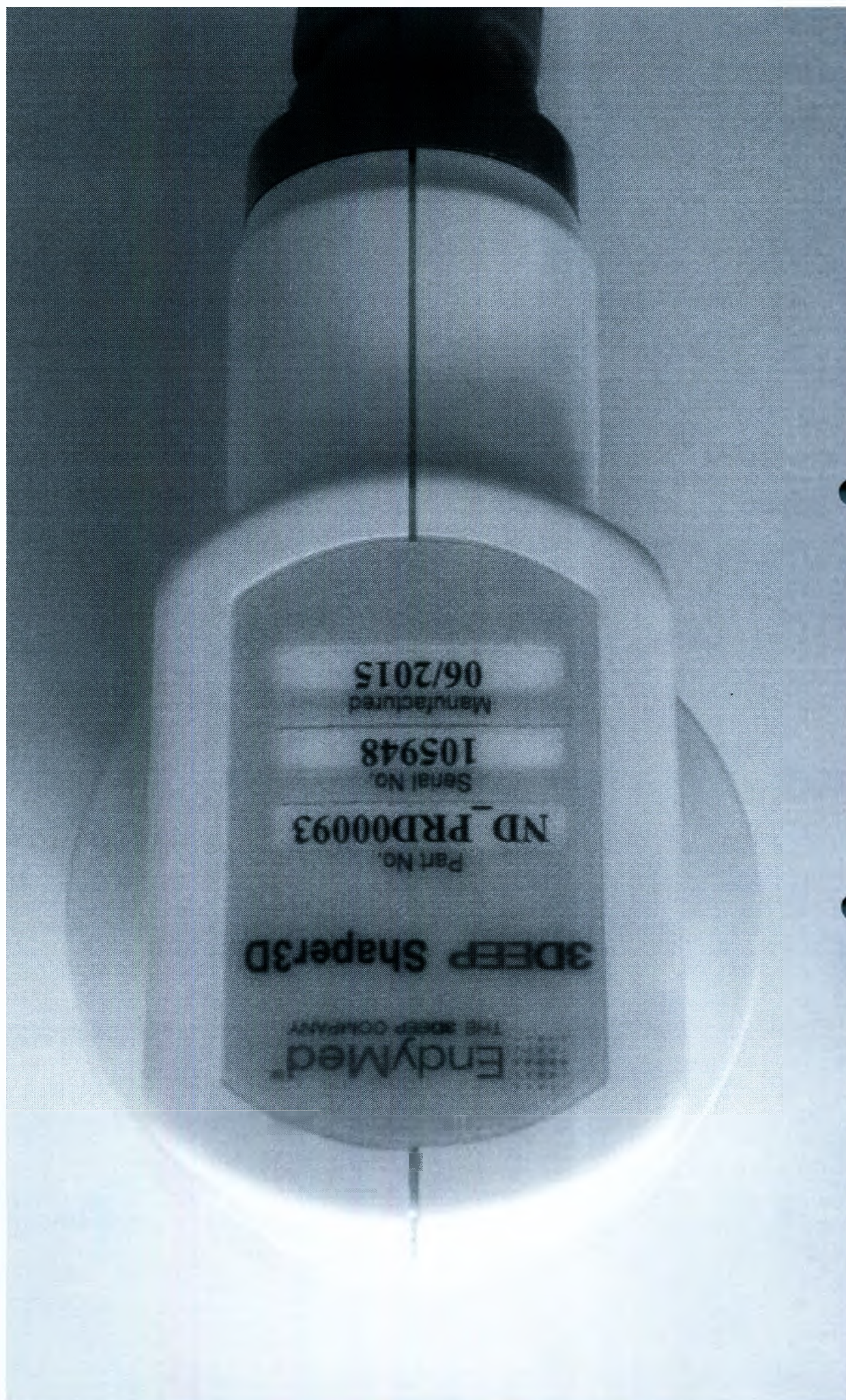

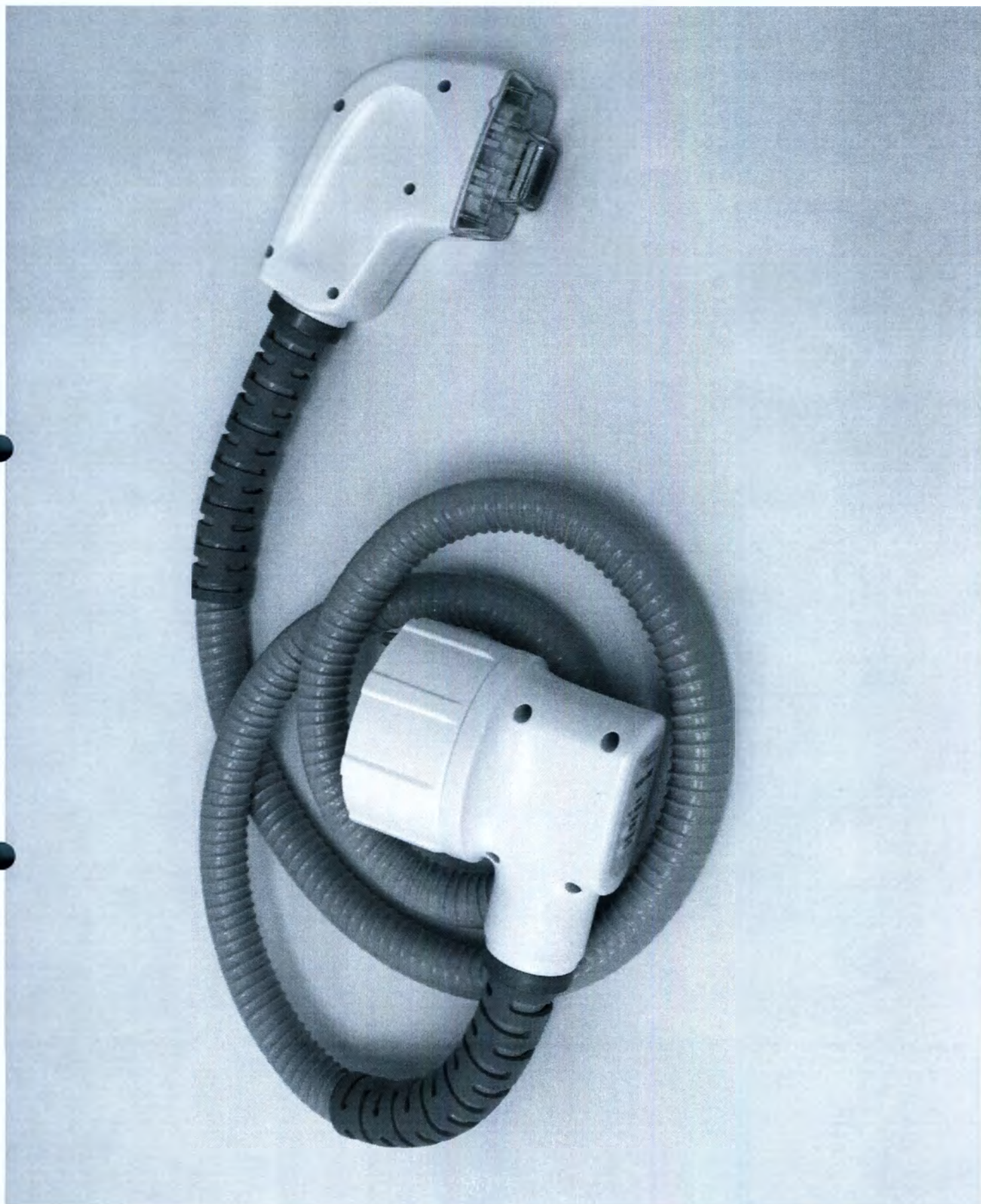

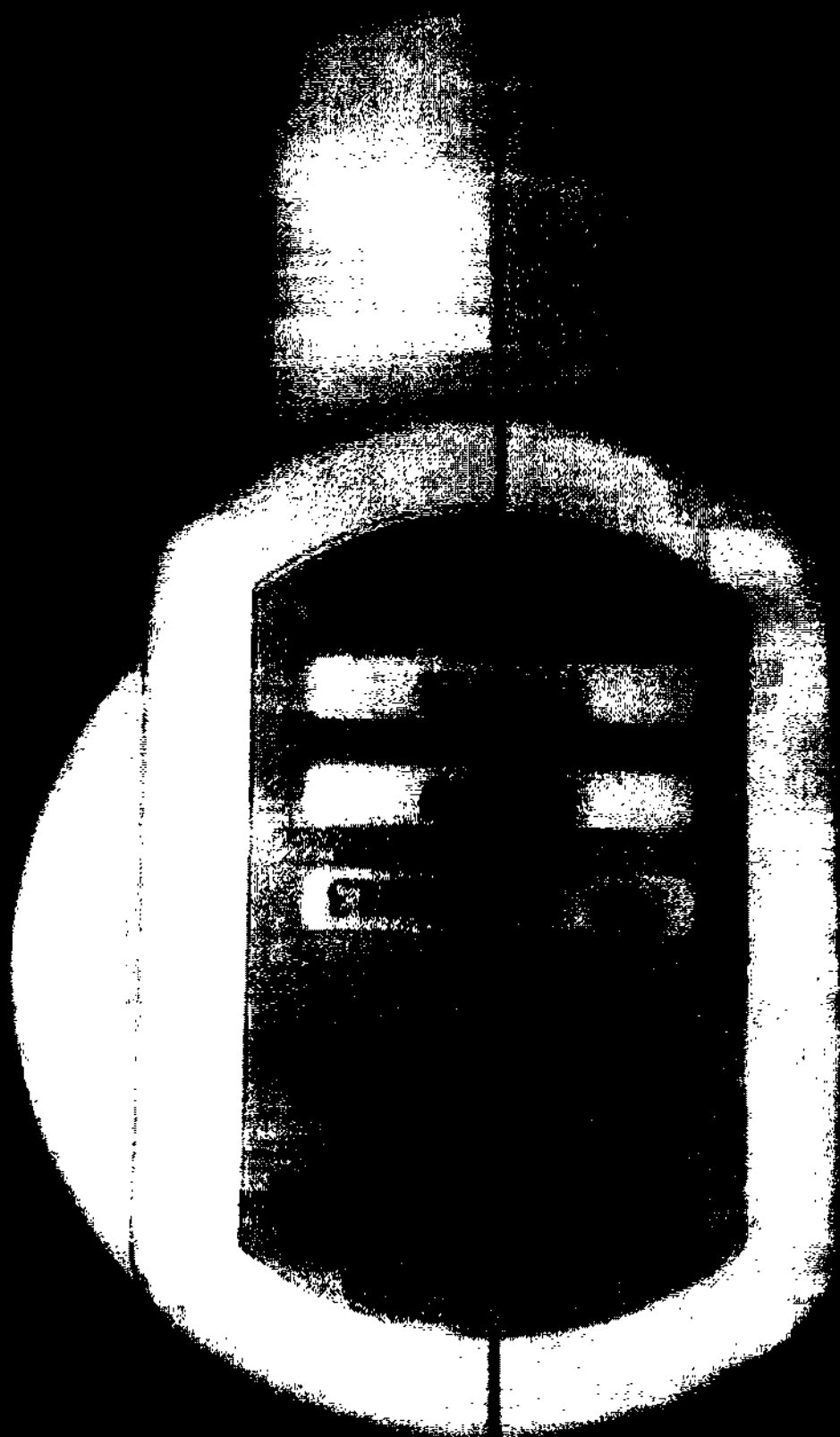




10 Treatment Tips for the FSR Handpiece

up to

450



pulses per tip

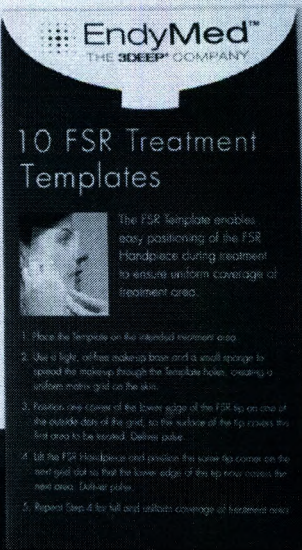


10 FSR Treatment Templates

The FSR template enables easy positioning of the FSR Handpiece during treatment to ensure uniform coverage of treatment area.

1. Place the template on the intended treatment area.
2. Use a light, oil-free makeup base and a small sponge to spread the makeup through the template holes, creating a uniform matrix grid on the skin.
3. Position one corner of the lower edge of the FSR tip on one of the outside dots of the grid, so the surface of the tip covers the first area to be treated. Deliver pulse.
4. Lift the FSR Handpiece and position the same tip corner on the next grid dot so that the lower edge of the tip now covers the next area. Deliver pulse.
5. Repeat Step 4 for full and uniform coverage of treatment area.

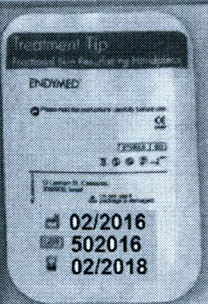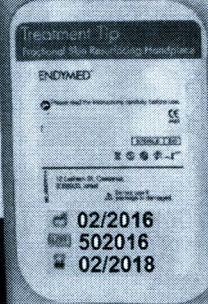

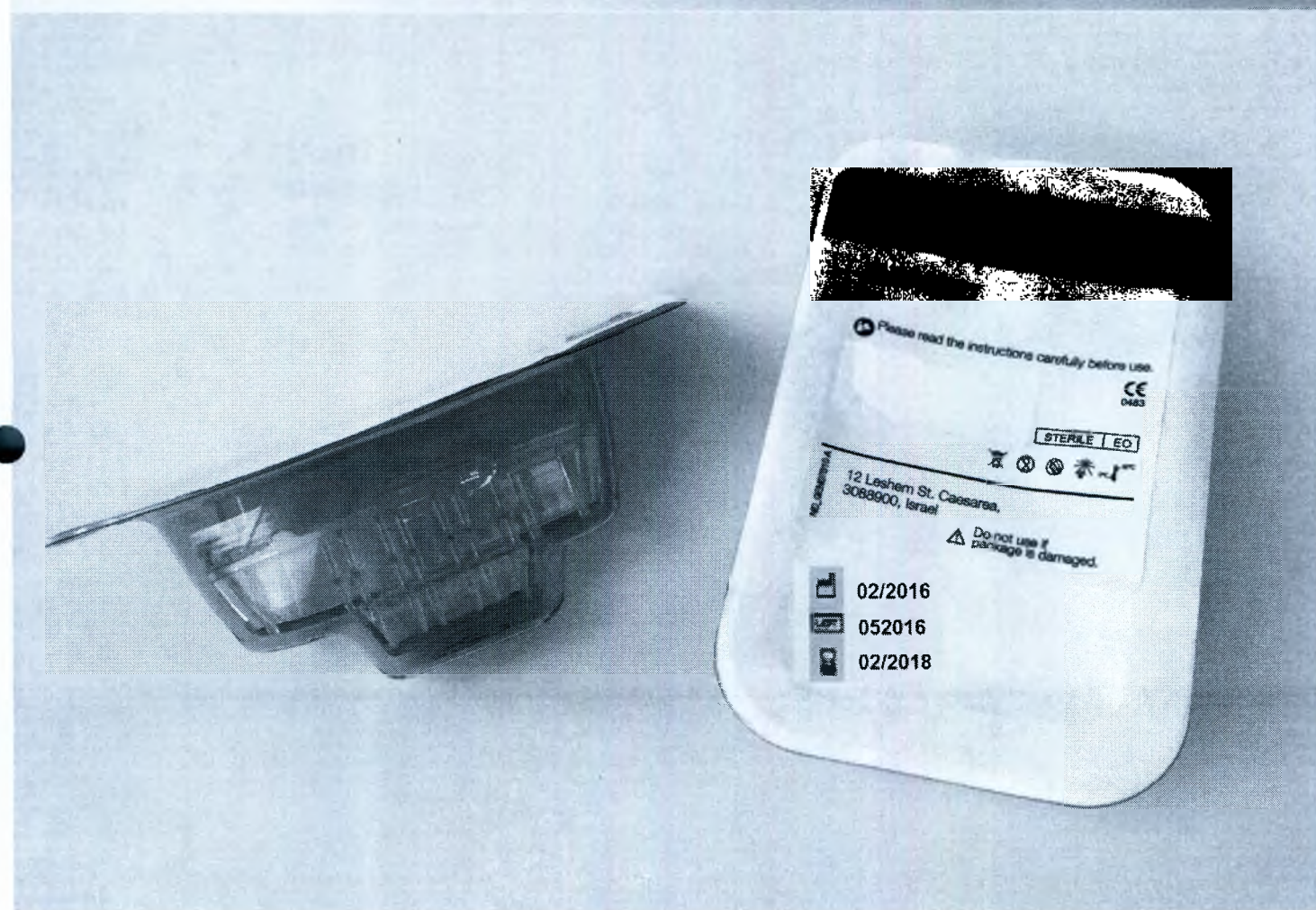

Сшито и заверено печатью
ООО «ДАЛАНС» листов 69
Генеральный директор
ООО «ДАЛАНС» Сяомаровская А.О.
документов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
* г. Москва *