

КОПИЯ

### Operational documentation

Lubricant for intimate use with silicone Contex Silk

Date 4.10.2018

Signature & Name DAVID PŘEKOPAL

Date 04.10.2018

Signature & Name SILVIA FIEROVA

S.R.

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy číslo O

632, 634/2018

Ověřuji, že se na této listině přede mnou vlastnoručně podepsali-----


David Pfikryl, nar. 20.03.1972, bytem Brno, Nedbalova 485/27,-----

RNDr. Silvia Fůzerová, nar. 29.08.1978, bytem Slovenská republika, Košice-Dargovských  
hrdinov, Postupimská 752/5-----

jejichž totožnost jsem zjistil z platných úředních průkazů.-----

V Brně dne 04.10.2018-----

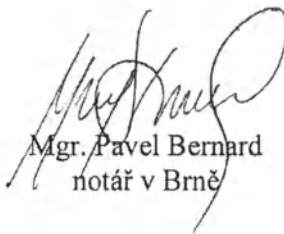

  
Mgr. Pavel Bernard  
notář v Brně



Instruction for use <sup>1</sup>  
of medical device «Lubricant for intimate use with silicone Contex Silk», legal manufacturer  
«Altermed Corporation s.r.o»

MEDICAL DEVICE NAME

“Lubricant for intimate use with silicone Contex Silk”

Registration certificate number № \_\_\_\_\_

LEGAL MANUFACTURER

Altermed Corporation s.r.o. Pekarska 2997/36A, 74601 Opava, Czech Republic

Manufacturing site:

Cosmonde a.s. Dusikova 795/7, Brno, Czech Republic

Device description

Lubricant for intimate use with silicone Contex Silk is a medical device with intended purpose to ease the unpleasant and painful sensations during intercourse with insufficient vaginal humectation, which leads for additional pleasure and comfort.

These lubricants are applied to the intimate areas prior to sexual intercourse or as required. The products are suitable for vaginal and anal sex, as indicated on instructions for use.

Lubricant ease the discomfort that may occur when natural lubrication is missing.

Lubricant for intimate use with silicone Contex Silk has long sliding properties to improve the sensation during sexual intercourse with insufficient moistening of the vaginal mucosa (longer-acting compared with «Lubricant for intimate use Contex Wave», based on laboratory report «J20171215-RB Hull – Lubricants»). Produced on water-basis. Does not contain alcohol. Intended for adults. Does not destroy latex. Helps to prevent friction.

<sup>1</sup> The corresponding information included on the bottle of medical device

## Lubricant composition

| Device name                                           | Chemical compound/raw material name            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lubricant for intimate use with silicone Context Silk | Purified water                                 |
|                                                       | Glycerin                                       |
|                                                       | Cyclomethicone                                 |
|                                                       | Dimethicone                                    |
|                                                       | Cellulose Gum                                  |
|                                                       | Carbomer                                       |
|                                                       | Sodium Hydroxide                               |
|                                                       | Aroma Forest fruit/Vanilla                     |
|                                                       | Propylene Glycol, Methylparaben, Propylparaben |

## MEDICAL DEVICE APPLICATION

Lubricant for intimate use with silicone Context Silk is a medical device with intended purpose to ease the unpleasant and painful sensations during intercourse with insufficient vaginal mucosal humectation

## PRECAUTIONS FOR USE AND POSSIBLE SIDE EFFECTS

Avoid contact with eyes. Do not apply on damaged skin. Do not use in case of container failure. Do not use in cases of hypersensitivity to some of the product ingredients. Use only as indicated. In case of accidental ingestion, seek medical advice. Do not use the product after the expiry date indicated on the bottom of packaging. Keep out of the reach of children. Do not expose to direct sunlight. In case of occurrence of adverse effects please contact immediately doctor.

## Description and application.

To open for the first time: use a twisting motion along the perforation following the direction of the arrows - for 100 ml bottle; open cap – 30 ml pack. Open the bottle or tuba and squeeze out by pressing on the dispenser or the tuba. Apply the gel before and during sexual intercourse on intimate areas, or externally on a fitted condom\* always in amounts as needed. After sexual intercourse, it is desirable to wash off the gel with warm water.

\* Lubricant for intimate use with silicone Context Silk compatible with NRL condoms

## STORAGE AND SHELF LIFE

### Storage

Store at the following temperature 5°C – 25°C, out of reach of children and away from direct sunlight.

### Shelf- life:

1. Lubricant for intimate use with silicone Contex Silk - 3 years

### Labelling on the bottle

| Symbol                                                                              | Interpretation                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>Name:</b> Batch number                   |
|   | <b>Name:</b> EXP - Use by                   |
|  | <b>Name:</b> Do not litter!                 |
|  | <b>Name:</b> PP (Polypropylene)             |
|  | <b>Name:</b> before using read instructions |

Additional information can be printed on the individual package, such as trade name, importer, authorized representative, advertising information, including reference to international standards

## CONSUMER COMPLAINTS

In the event of consumer complaints regarding the device, contact with authorized representative in Russia Federation «Reckitt Benckiser Healthcare LLC»

Legal address 115114 Moscow, Shluzovaya emb.,4, 3rd floor.

Phone: +7 (495) 961 25 65; fax: +7 (495) 961 25 66.

Telephone Hotline (free of charge in Russia): 8-800-200-82-20

e-mail: [contact\\_ru@rb.com](mailto:contact_ru@rb.com)

**Эксплуатационная документация**  
**Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk**

Дата: 4.10.2018

Подпись и имя: Давид Пржикрыл /подписано/

Дата: 4.10.2018

Подпись и имя: Силвия Фюзерова /подписано/

## Заверение – легализация

Порядковый номер книги заверений № 0 632/637/2018

Заверяю, что настоящий документ в моем присутствии собственноручно подписали

**Давид Пржикрыл, род. 20.03.1972, проживающий Брно, Недбалова 485/27,**

**Силвия Фюзерова, род. 29.08.1978, проживающая Словацкая республика, Кошице – Драговских хрдинов, Поступимска 752/5**

чьи личности мною установлены на основании действующих официальных документов.

В Брно, 04.10.2018

/подписано/

Павел Бернارد

Нотариус в Брно

/Гербовая печать:

ПАВЕЛ БЕРНАРД – НОТАРИУС В БРНО./

Гербовая печать:  
ПАВЕЛ БЕРНАРД – НОТАРИУС В БРНО./

Гербовая печать:  
ПАВЕЛ БЕРНАРД – НОТАРИУС В БРНО./

Гербовая печать:  
ПАВЕЛ БЕРНАРД – НОТАРИУС В БРНО./

## Инструкция по применению<sup>1</sup>

медицинского изделия «Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk», официальный производитель «Альтермед Корпорэйшн с.р.о.»

### НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_

### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Альтермед Корпорэйшн с.р.о.» Пекарска 2997/36А, 74601 Опава, Чешская Республика.

Место производства:

Космонде а.с. (Cosmonde a.s.) Дусикова 795/7, Брно, Чешская Республика

### Описание изделия

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk является медицинским изделием для уменьшения сухости и дискомфорта во время полового акта при недостаточной влажности влагалища, для улучшения ощущений во время полового акта, что способствует дополнительному комфорту и удовольствию.

Данный лубрикант наносят на интимные зоны перед половым актом или по мере необходимости. Изделие подходит для вагинального и анального секса, согласно информации, указанной в инструкции по применению.

Гель-смазка уменьшает дискомфорт который может возникнуть в случае отсутствия естественной смазки.

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk обладает длительными скользящими свойствами для улучшения ощущений во время полового акта при недостаточной влажности слизистой влагалища (длительного действия по сравнению с «Гелем-смазкой для интимного применения Contex Wave» согласно лабораторному отчету «J20171215-RB Hull – Lubricants»). Производится на водной основе. Не содержит спирта. Предназначен для взрослых. Не разрушает латекс. Помогает предотвратить трение.

## Состав лубриканта:

| Наименование изделия                                         | Химическое соединение                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk | Очищенная вода                               |
|                                                              | Глицерин                                     |
|                                                              | Циклометикон                                 |
|                                                              | Диметикон                                    |
|                                                              | Целлюлозная камедь                           |
|                                                              | Натрия гидроксид                             |
|                                                              | Пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен |
|                                                              | Карбомер                                     |
|                                                              | Ароматизатор Дикае фрукты/ваниль             |

## НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk является медицинским изделием, предназначенное для уменьшения сухости и дискомфорта во время полового акта при недостаточной влажности влагалища

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Избегать попадания в глаза. Не наносить на поврежденную кожу. Не использовать в случае повреждения упаковки. Не использовать при повышенной чувствительности к ингредиентам продукта. Применять строго в соответствии с инструкцией. При случайном проглатывании следует обратиться за медицинской помощью. Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на нижней стороне упаковки. Хранить в недоступном для детей месте. В случае возникновения нежелательных эффектов необходима немедленная консультация врача.

## Описание и способ применения

Для первого вскрытия следует выполнить вращающее движение вдоль перфорации в направлении стрелок - флакон 100 мл; открыть колпачок – 30 мл туба. Открыть флакон или тубу и выдавить путем нажатия на дозатор или сжатия тубы. Следует наносить гель в необходимом количестве до и во время полового акта, аккуратно выдавите немного геля-смазки и нанесите на интимные области. Также можно наносить на внешнюю сторону надетого презерватива\*. После полового акта желательно смыть гель-смазку теплой водой.

\* Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk совместим с презервативами из натурального латекса

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

### Хранение

Хранить при температуре 5°C – 25°C, беречь от детей и избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности:

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk - 3 года

### Символы на упаковке

| Символ                                                                              | Интерпретация                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Обозначение: Номер серии                                     |
|    | Обозначение: EXP - использовать до                           |
|   | Обозначение: утилизировать как бытовые отходы                |
|  | Обозначение: ПП (полипропилен)                               |
|  | Обозначение: перед использованием ознакомьтесь с инструкцией |

## РЕКЛАМАЦИЯ

В случае претензий потребителей относительно изделия следует обратиться в ООО «Рекитт Бенкизер Хелскэр».

Юридический адрес: 115114 Москва, Школовская набережная 4, 3 этаж

Телефон: +7 (495) 961 25 65; факс: +7 (495) 961 25 66.

Телефон горячей линии (бесплатно по России): 8-800-200-82-20

e-mail: [contact\\_ru@rb.com](mailto:contact_ru@rb.com)

*Перевод с английского и чешского языков на русский язык выполнен переводчиком Чистяковой Викторией Дмитриевной.*



Российская Федерация. Город Москва.

Двадцать четвертого октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, **Боронина Евгения Владимировна**, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы **Бахтадзе Эльмиры Юрьевны**, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Чистяковой Виктории Дмитриевны**.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: №77/52-н/77-2018-

Взыскано по тарифу **100 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: --

Е.В. Боронина

Подпись

Печать

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью.....лист.....  
ВРИО Нотариуса.....)  
Подпись

Печать

Российская Федерация. Город Москва

Двадцать четвертого октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, **Боронина Евгения Владимировна**, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы **Бахтадзе Эльмиры Юрьевны**, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: №77/52-н/77-2018-

Взыскано по тарифу:

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: --

Е.В. Боронина



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью.....лист.....  
ВРИО Нотариуса.....)

