

Chokhani Pharma



Lalit Chokhani
Managing Partner

INSTRUCTION FOR USE

Condoms Casanova Premium
natural latex not flavored

production: Chokhani Pharma, India

306 Kakad Chambers, 132 Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai - 400018, Maharashtra, India

2013

Description

ontoured condom with a ribbed , dotted and smooth texture in a silicone lubricant with the
ore sperm , transparent color ;

Casanova Premium Triple sensation Dotted & Ribbed (Textured) /

"Casanova Premium " Triple feel " point- ribbed (textured)

- Ribbed condom with dotted texture in a silicone lubricant , with the store sperm , transparent
colors .

Terms of use

The condom is a single means of contraception , so each Just use a new condom .

Tear off a strip along one side of the foil and carefully remove the condom .

Condoms are strong enough , but it can be torn by sharp fingernails or jewelry. You should only
wear a condom on the penis is erect and before contact with the body of a partner, it helps to
prevent disease , sexually transmitted diseases , and pregnancy.

Hold the tip of the condom , squeeze two fingers tank condom to force out the air. This will
create space for the sperm . Do this carefully , as the remaining air in the tank can cause the
condom breaking .

If the penis is uncircumcised (a foreskin) , you need to pull the foreskin back before putting the
condom .

Then place it over the head of the penis beaded cuff out. Unroll the condom the other hand ,
spreading it down to the base of the penis, so that it covered the entire penis in a state of
excitement .

If you feel that the condom is very small for you , use a condom increased size. If on the
contrary , put on a condom is kept too loose , use a condom with a locking ring, which does not
allow the condom to slip .

After ejaculation , remove the penis from the vagina , pinning him to the ring of the condom to prevent it from sliding . The condom should be removed only after the complete removal of the penis. Do not touch the penis and vagina condom to prevent any contact with perm.

After using a condom should be immediately discarded. Wrap it in a tissue and throw in the garbage container (bucket) .

DO NOT EMPTY condom down the toilet !

To reduce the risk the integrity of the condom :

- Store in a dry place away from direct sunlight .
- Protect from mechanical damage.
- Do not open the package with his teeth.
- Do not unroll the condom before you put it on the penis.
- If the condom is unwound in easily, by choosing the wrong side of it .
- Condoms have a shelf life , which is always indicated on the package.
- Do not wear a condom in your back pocket is much better to keep it in a shirt pocket or a protected case.
- At the end of the condom leave the place . If the "reservoir" No, just squeeze the top of the condom.
- Use only water-based lubricants , and the rest will damage the latex .
- If you feel that the condom broke , you should immediately stop the sexual act and replace the condom.

GENERAL SPECIFICATION

condoms "Casanova Premium"
Standard: ISO 4074

Test parameters	specification
DIMENSIONS	
Length (mm)	at least 180
Width (mm)	53 ± 2
Thickness (mm)	$0,065 \pm 0,015$
Fracture volume (L) Prior to the expiration date	at least 18.0
BURST PRESSURE (kPa) before the expiration date	Minimum 1,0
Leak test	No leakage
visual inspection	No visible punctures and tears
The content of lubricant (mg)	Минимум 250
Integrity of the package (kPa)	Нет утечки при $(20 \pm 5 \text{ кПа})$ в течение 1 минуты
Packaging and labeling	

Shelf life

Store in a dry place at a temperature below 0 ° C.
Keep container away from direct sunlight.
Keep away from packing heat.
Before use, perform a visual inspection and check the integrity of the packaging.
Shelf life - 5 years from date of manufacture.

The procedure for disposal

Condoms are disposed of with household waste in compliance with local regulations for disposal in the country of use.

REPRESENTATIVE IN RUSSIA

When a defective product claims or discrepancies are accepted
Representation of manufacturer in the Russian Federation:

Address: LLC "Caravaggio", Russia, 129337, Moscow, ul. Yaroslavl highway,
116, page 3, tel. / Fax: 8 (499) 188-25-93, 183-90-10 dob.131; e-mail: gurova_l@bk.ru
TIN 7716664661 7716664661 FREE , 1107746412839 PSRN

General Director
OOO. "Caravaggio"

Gurova E.H

арма»
 Директ
 Лалит

Генконсульство России в Мумбаи, Индия
 удостоверяет подлинность предстоящей подписи и
 печати Хорат, сотрудника
 Департамента внутренних дел штата Махараштра
 Консул России в г.Мумбаи
 № 1266-2003
 "11" октября 2013 г



The Signature of Shri Prakash
 is hereby certified
 Secy. Office
 Consulate General
 Government of India
 Mumbai, India

ATTESTED BY MR
S. R. LOKHANDE
 NOTARY
 GOVT. OF INDIA

3 OCT 2013

19 OCT 2013





Фарма»

Лалит Чохани

Директор

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Презервативы Casanova Premium натуральные латексные, не ароматизированные»

производства: Chokhani Pharma «Чохани Фарма», Индия,
306 Kakad Chambers, 132 Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai - 400018, Maharashtra, India

2013г.

Описание

Представляем Вам серию высококачественных презервативов «Презервативы Casanova Premium натуральные латексные, не ароматизированные», которые обеспечивают естественность ощущений, добавляют яркости наслаждению, не уменьшая защиту.

Презервативы Casanova Premium натуральные латексные, не ароматизированные» представлены в 4-х вариантах исполнения: Casanova Premium Classic (Plain) (гладкие)» :

Контурный презерватив с гладкой текстурой в силиконовой смазке, с накопителем спермы, прозрачного цвета;

Casanova Premium Dotted - контурный презерватив с точечной текстурой в силиконовой смазке для усиления чувствительности, с накопителем спермы, прозрачного цвета;

Casanova Premium Ribbed- контурный презерватив с ребристой текстурой в силиконовой смазке для усиления чувствительности, с накопителем спермы, прозрачного цвета;

Casanova Premium Triple sensation Dotted & Ribbed (Textured)/- ребристый презерватив с точечной текстурой в силиконовой смазке, для максимальной стимуляции обоих партнеров, с накопителем спермы, прозрачного цвета.

Как использовать презерватив

Презерватив является одноразовым средством контрацепции, поэтому каждый раз используйте новый презерватив.

Оторвите полоску вдоль одной стороны фольги и аккуратно достаньте презерватив. Презервативы достаточно прочные, но могут порваться от острых ногтей или бижутерии. Надевать презерватив следует только на член в состоянии эрекции и до контакта с телом партнера, это помогает предупредить заболевания, передающиеся половым путем, и беременность.

Придерживая презерватив за кончик, сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы вытеснить воздух. Это создаст место для спермы. Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива.

Если половой член не обрезан (имеет крайнюю плоть), необходимо оттянуть крайнюю плоть, прежде чем одевать презерватив. Затем оденьте его на головку члена закрученным краем наружу. Другой рукой раскрутите презерватив, расправив его вниз до основания полового члена, так, чтобы он покрыл весь половой член в состоянии возбуждения. Если Вы ощущаете, что презерватив для вас очень мал, то воспользуйтесь презервативом увеличенного размера. Если же наоборот, надетый презерватив держится слишком свободно, воспользуйтесь презервативом с фиксирующим кольцом, которое не позволяет презервативу соскользнуть.

после эякуляции, извлеките половой член из влагалища, прижав к нему презерватива, чтобы он не соскользнул. Презерватив следует снимать только полного выведения члена. Не касайтесь половым членом и презервативом рта, чтобы предупредить какой-либо контакт со спермой. После использования презерватив необходимо немедленно выбросить. Положите его в салфетку и выбросьте в мусорную ёмкость (ведро). **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ В УНИТАЗ!**

Для снижения степени риска нарушения целостности презерватива

- Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.
- Предохранять от механических повреждений.
- Не открывайте упаковку зубами.
- Не разворачивайте презерватив до того, как одеть его на половой член.
- Если презерватив раскручивается с трудом, значит, выбрана неправильная его сторона.
- Презервативы имеют свой срок хранения, который всегда указывается на упаковке.
- Не рекомендуется носить презерватив в заднем кармане брюк, намного лучше держать его в кармане рубашки или защищенном футляре.
- На конце презерватива оставьте место. Если «резервуара» нет, просто сожмите верх презерватива.
- Используйте только смазки на водной основе, остальные повреждают латекс.
- Если Вы почувствовали, что презерватив порвался, следует немедленно прервать половой акт и заменить презерватив.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Шпатель «Казанова Премиум»

Параметры тестирования	Спецификация
РАЗМЕРЫ	
Длина (мм)	Минимум 180
Ширина (мм)	53 ± 2
Толщина (мм)	$0,065 \pm 0,015$
<u>ОБЪЕМ РАЗРЫВА (Л)</u> До окончания срока годности	Минимум 18,0
<u>ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА (кПа)</u> До окончания срока годности	Минимум 1,0
Тест на утечку	Нет утечки
Визуальная проверка	Нет видимых проколов и разрывов
Содержание лубриканта (мг)	Минимум 250
Целостность упаковки (кПа)	Нет утечки при $(20 \pm 5 \text{ кПа})$ в течение 1 минуты
Упаковка и маркировка	Соответствует требованиям

и срок хранения

хранение в сухом месте при температуре не ниже 0°C.

упаковку от прямых солнечных лучей.

упаковку от теплового воздействия.

после употребления необходимо производить внешний осмотр и убедиться в целостности упаковки.

Срок хранения – 5 лет с момента производства.

Порядок осуществления утилизации

Презервативы после использования подвергаются утилизации вместе с прочими бытовыми отходами по правилам страны использования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

При обнаружении брака или несоответствия изделия претензии принимаются Представительством производителя в Российской Федерации:

Адрес: ООО «Караваджо», Россия, 129337, г. Москва, ул. Ярославское шоссе, д. 116, стр. 3; тел./факс: 8 (499) 188-25-93, 183-90-10 доб.131; e-mail: gurova_1@bk.ru
ИНН 7716664661; ОГРН 1107746412839

страница 1.
 Производство: Чо
 06 Какад Чамбе
 Печати и штамп
 Круглая печать
 НОТАРИУС
 МУМБАЙ
 МАХАРА
 Рег. № 46
 ПРАВИ
 Круг
 Под
 III
 F

Генконсульство России в Мумбаи, Индия
 удостоверяет подлинность предстоящей подписи и
 печати У. Хорат, сотрудника
 Департамента внутренних дел штата Махараштра
 Консул России в г. Мумбаи
 № 1266-2013
 "1" октября 2013 г.





The Signature of U. Horat

 U. Horat
 Deputy Commissioner
 Maharashtra, Mumbai

ATTESTED BY MR
S. R. Lokhande
 S. R. LOKHANDE
 NOTARY
 GOVT. OF INDIA

- 3 OCT 2013.

9 OCT 2013

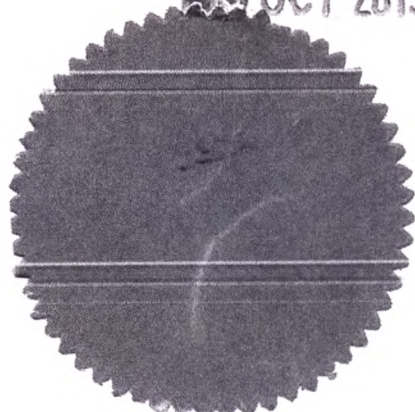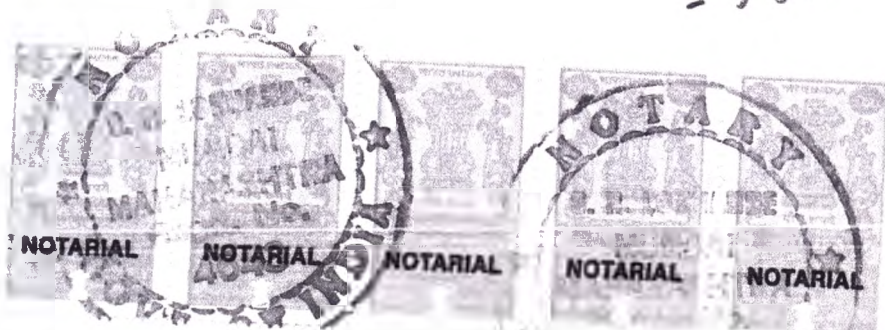

раница 1.

производство: Чохани Фарма, Индия,

06 Какад Чамберс, 132, Др. А.Б. Роуд, Ворли, Мумбай – 400018, Махараштра, Индия

Печати и штампы:

Круглая печать:

НОТАРИУС С.Р.ЛОКХАНД

МУМБАЙ

МАХАРАШТРА

Рег. № 4643

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ

Круглая печать:

Подразделение Управления местного департамента

Штамп:

Настоящим свидетельствую достоверность подписи
(подпись)

Махараштра, Мумбай, 30 октября 2013 г.

Штамп:

ЗАВЕРЕННАЯ ПОДЛИННАЯ КОПИЯ

(подпись)

С.Р.ЛОКХАНД

НОТАРИУС

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ

09 ОКТЯБРЯ 2013 г.

Перевод с хинди и английского языков на русский язык.

Перевела

Фальковская Н.Я.

Город Москва

Восемнадцатого ноября две тысячи тринадцатого года

Я, БИБИШЕВА Амалия Романовна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Фальковской Ниной Яковлевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-21344
Взыскано госпошлины (по тарифу) 100 руб. 00 коп.
Нотариус



Всего прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью 11 листа
Нотариус

