

«Утверждаю»/«Approve»


Nobel Biocare AB

Regulatory Affairs Manager

(должность/position)

Alessandro Rainis

(имя/name)

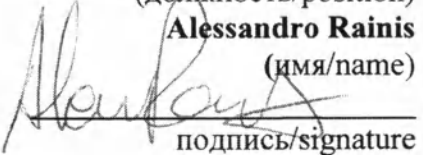

подпись/signature

Nobel Biocare AB
P.O. Box 5190
SE - 402 26 Göteborg
Sweden

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями»

I, the undersigned, Eric von Platen, Notary Public
in the City of Stockholm, hereby certify that:

Mr Alessandro Rainis

has signed this document.

Stockholm *2019-11-13*

Ex officio



Eric von Platen



2019

Оглавление

Пункт	Стр
1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	2
2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	3
4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗУБНОМУ ПРОТЕЗИРОВАНИЮ	9
5. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	14
6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	14
7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ КОМБИНАЦИИ	125
8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	132
9. СТЕРИЛИЗАЦИЯ МИ	134
10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	158
11. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) - ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	158
12. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	159
13. УПАКОВКА	159
14. МАРКИРОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	165
15. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА РИСКА	172
16. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	184
17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВАЛИДАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	184
18. ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ	184
19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	184
20. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	187
21. СРОК ГОДНОСТИ	187
22. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	188
23. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ИЛИ ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	188

Настоящая эксплуатационная документация подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации.
Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416).
Информация, содержащаяся в этом досье, его приложениях и дополнениях, сам факт существования такого досье или же содержание его осуждения с Nobel Biocare AB не должны быть раскрыты никаким другим сторонам без предварительного письменного разрешения Nobel Biocare AB.

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями:

1. Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, в комплекте с фиксирующим винтом;
2. Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, в комплекте с фиксирующим винтом;
3. Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 4.3 RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;
4. Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;
5. Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 5.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;
6. Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;
7. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
8. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
9. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
10. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
11. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
12. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
13. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
14. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
15. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
16. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
17. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
18. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;
19. Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом;
20. Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в

комплекте с ортопедическим винтом;

21. Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом;

II. Принадлежности:

1. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
2. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
3. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
4. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
5. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
6. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
7. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
8. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
9. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
10. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
11. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
12. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
13. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
14. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
15. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
16. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
17. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
18. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.;
19. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем – не более 500 шт.;

20. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем – не более 500 шт.;
21. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем – не более 500 шт.;
22. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем – не более 500 шт.;
23. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем – не более 500 шт.;
24. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем – не более 500 шт.;
25. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 1.5 мм – не более 500 шт.;
26. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 2.5 мм – не более 500 шт.;
27. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 1.5 мм – не более 500 шт.;
28. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 2.5 мм – не более 500 шт.;
29. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 1.5 мм – не более 500 шт.;
30. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 2.5 мм – не более 500 шт.;
31. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.;
32. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.;
33. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер RP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.;
34. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер RP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.;
35. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 4 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.;
36. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.;
37. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP – не более 500 шт.;
38. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер WP – не более 500 шт.;
39. Колпачок золотой/пластиковый PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом – не более 500 шт.;
40. Цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical – не более 500 шт.;
41. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, диаметр 3.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
42. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, диаметр 4.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
43. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, диаметр 4.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;

44. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, диаметр 5.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
45. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
46. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, диаметр 5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
47. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
48. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, диаметр 7 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
49. Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом – не более 500 шт.;
50. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.25HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
51. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.5RPL, диаметр 3.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
52. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 4.3RPL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
53. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 5.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
54. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 6.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
55. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.8/4.5 HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
56. Трансфер, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом – не более 500 шт.;
57. Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
58. Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
59. Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
60. Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
61. Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
62. Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
63. Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
64. Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
65. Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring – не более 500 шт.;
66. Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом – не более 500 шт.;

67. Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом – не более 500 шт.;
68. Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом – не более 500 шт.;
69. Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment – не более 500 шт.;
70. Трансферный пин с установленной резьбой Thread Tided Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 – не более 500 шт.;
71. Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом – не более 500 шт.;
72. Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом – не более 500 шт.;
73. Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом – не более 500 шт.;
74. Аналог On1 IOS Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом – не более 500 шт.;
75. Аналог On1 IOS Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом – не более 500 шт.;
76. Аналог On1 IOS Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом – не более 500 шт.;
77. Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP – не более 500 уп.;
78. Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP – не более 500 уп.;
79. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP – не более 500 шт.;
80. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп. – не более 500 уп.;
81. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 – не более 500 шт.;
82. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP – не более 500 шт.;
83. Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упак – не более 500 шт.;
84. Лабораторный винт ортопедический On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP – не более 500 шт.;
85. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм – не более 500 шт.;
86. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, длина 20 мм – не более 500 шт.;
87. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 20 мм – не более 500 шт.;
88. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 30 мм – не более 500 шт.;
89. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм – не более 500 шт.;
90. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 20 мм – не более 500 шт.;
91. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 30 мм – не более 500 шт.;

92. Направляющий пин, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм – не более 500 шт.;
93. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP, диаметр 3.5 – не более 500 шт.;
94. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP – не более 500 шт.;
95. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 4.3 – не более 500 шт.;
96. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 5.0 – не более 500 шт.;
97. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP – не более 500 шт.;
98. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP – не более 500 шт.;
99. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP – не более 500 шт.;
100. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0 – не более 500 шт.;
101. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, 5 шт. в упак. - не более 500 уп.;
102. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, 5 шт. в упак. - не более 500 уп.;
103. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, 5 шт. в упак. - не более 500 уп.;
104. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, 5 шт. в упак. - не более 500 уп.;

2 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: «Nobel Biocare AB» (Нобель Байокер АБ)

Адрес: Box 5190, 402 26, Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden.

Телефонный номер: +46 31818917

Официальная страница в интернете: <https://www.nobelbiocare.com>

3 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями применяется в качестве основания под ортопедические конструкции на верхней или нижней челюсти для восстановления жевательной функции и эстетики.

Могут представлять собой суперструктуру (или быть введенными в их конструкцию) на зубных имплантатах.

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями производятся в целом ряде различных форм, диаметров и с учетом разных высот десны, с тем чтобы дать стоматологу сразу несколько возможностей решения индивидуальной проблемы.

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями классифицируются в соответствии с типом соединений имплантата и абатмента, методом протезирования и типом финальной реставрации.

Показания:

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями предназначены для лечения ротовой эндоссальной имплантацией в нижней и верхней челюсти, а также для функциональной и эстетической ротовой реабилитации лишенных зубов и пациентов с частичным протезированием.

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями также могут использоваться для немедленной или ранней имплантации после удаления или утраты натуральных зубов. Для ортопедического протезирования применяются единичные коронки, мосты и частичные или полностью съемные протезы, которые связаны с имплантатами, соответствующими абатментами. Они предназначены для обеспечения немедленной функциональной нагрузки на однозубные и/или многозубные аппликации при достижении хорошей первичной устойчивости с соответствующей окклюзивной нагрузкой, необходимой для восстановления жевательной функции.

Противопоказания:

Установка абатментов противопоказана в следующих случаях:

- у пациентов с медицинскими противопоказаниями к выполнению хирургических стоматологических вмешательств;
- у пациентов, которым невозможно установить имплантаты такого размера, в таком количестве или в те позиции, которые необходимы для безопасного осуществления функциональной или парафункциональной нагрузки;
- у пациентов с аллергической реакцией или гиперчувствительностью к титановому сплаву марки 5 Ti6Al4V-ELI, золотому сплаву (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия), технически чистому титану класса 1, полиоксиметилену (POM) (марок Acetal (Delrin) (в том числе с красителем Magenta MASTERBATCH EPN28153 PINK VAR, MASTERBATCH YELLOW PYN21966), Hostaform MT24), полиэфирэфиркетону (PEEK)

(марок VestaKEEP M20G, PEEK-OPTIMA), силикону RS00170, нержавеющей стали (марок AISI 316, AISI 303 (или 1.4305), AISI 440FSe (S 44023).

- Абатменты временные с захватом Temporary Snappy Abutment Engaging должны быть выведены из окклюзии и не должны применяться для протезирования при полной адентии.

Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый сахарный диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции, окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

При наличии бруксизма или неблагоприятного соотношения челюстей план лечения может быть пересмотрен. В общем случае моделирование и установка ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией.

Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата.

Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом. Во избежание вдыхания незакрепленных компонентов рекомендуется использовать коффердам.

Все хирургические инструменты и приспособления следует содержать в хорошем состоянии и избегать повреждения имплантатов и других компонентов.

Стоматологам, как начинающим работать с продукцией «Nobel Biocare AB», так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов. Компания «Nobel Biocare AB» предлагает широкий выбор обучающих курсов для специалистов с различным уровнем знаний и опыта. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nobelbiocare.com.

Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения. Для этой цели компания «Nobel Biocare AB» располагает опытными специалистами, которые могут выступать в роли наставников по всему миру.

Чтобы обеспечить долгосрочный результат лечения, рекомендуем проводить регулярные комплексные осмотры пациента после имплантологического лечения и информировать его о надлежащей гигиене полости рта.

Побочные эффекты:

Установка абатментов для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями, а также любые другие хирургические процедуры, могут вызвать легкий дискомфорт и локализованную отечность.

Возможны такие осложнения, как:

- перелом имплантата,
- перелом временного протеза,
- ослабление фиксирующего винта абатмента, протезных компонентов,
- переломы ортопедических компонентов,
- кровотечение, расхождение швов,
- опухоль после операции, послеоперационная боль,
- гематома,
- локализованная инфекция, воспаление десны (гингивит),
- периимплантит.

В отдельных случаях в реставрационных процессах наблюдались следующие осложнения: перелом имплантата, перелом временного протеза, ослабление фиксирующего винта абатмента, протезных компонентов, переломы ортопедических компонентов, кровотечение, расхождение швов, опухоль после операции, послеоперационная боль, гематома, локализованная инфекция, воспаление десны (гингивит), периимплантит или проглатывание пациентом используемых компонентов, попадающих в ротовую полость.

Непосредственно после операции по внедрению абатментов очень важно избегать чрезмерных физических нагрузок. После хирургической процедуры возможны следующие побочные реакции: временная локальная припухлость, отёки, гематомы, временная потеря чувствительности, временное ограничение жевательной функции.

Диагностика/ Разъяснения:

Для обеспечения наиболее полной диагностики обязательными и существенными её элементами являются наличие полной медицинской карты пациента, клиническое обследование, рентгеноскопия ротовой полости (интраоральный снимок), панорамный рентгеновский снимок (ортопантограмма) и, при необходимости, компьютерная томография (КТ), или объёмная томография, а также процедура предоперационного снятия слепков с челюстей пациента. Рекомендуется медицинский осмотр у опытного специалиста-практика. Процесс имплантирования требует предоставления пациенту точной информации: информации экономического характера (стоимость послеоперационного лечения), информации медицинского характера (следует ознакомить пациента с альтернативными вариантами лечения, а также предупредить о возможных последствиях и рисках, связанных с имплантацией, как и в случае с прочими хирургическими процедурами). По вопросам содержания подобного рода информации придерживайтесь сложившейся практики.

Способ применения:

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями могут использоваться в рамках одно- или двухэтапной процедуры, для единичных или множественных замещений, и могут немедленно использоваться после достижения хорошей первичной устойчивости имплантатов и соответствующей окклюзионной нагрузки.

Предоперационное планирование и планирование протезирования

Модель, диаметр, длина, положение и количество изделий абатментов для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями должны выбираться для каждого клинического случая индивидуально, с учетом применения необходимого имплантата, качества и количества костной ткани и десны, доступного пространства. При необходимости следует выполнить диагностическое моделирование для пациента. В случаях с относительно высокими нагрузками следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы обеспечить соответствующее выравнивание имплантата, протезного компонента и протезов.

Каждый компонент имеет индивидуальные размеры с учетом важных параметров диагностики пространства.

Основные параметры:


- А) Диаметр;**
- В) Окклюзионная высота протезного компонента;**
- С) Измерение высоты;**

4 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗУБНОМУ ПРОТЕЗИРОВАНИЮ


На данном этапе необходимо выбрать конкретный абатмент для дентальных имплантатов в комплекте для окончательной реставрации. Данный этап может выполняться при зажившей слизистой оболочке (заживление подслизистой оболочки, обычный протокол) или во время хирургической операции по протоколам как одноэтапное/трансмукозальное заживление или немедленная нагрузка.

Необходимо учитывать следующие характеристики:


- a. Одиночная или множественная реставрация;
- b. Винтовая фиксация или цементируемая реставрация;
- c. Межокклюзионное пространство, высота и ширина;
- d. Высота десны (трансмукозальная высота);
- e. Биологическая ширина (расстояние от компонента до костного гребня);
- f. При необходимости коррекции углов имплантата для абатмента или при параллельном расположении смежных компонентов.

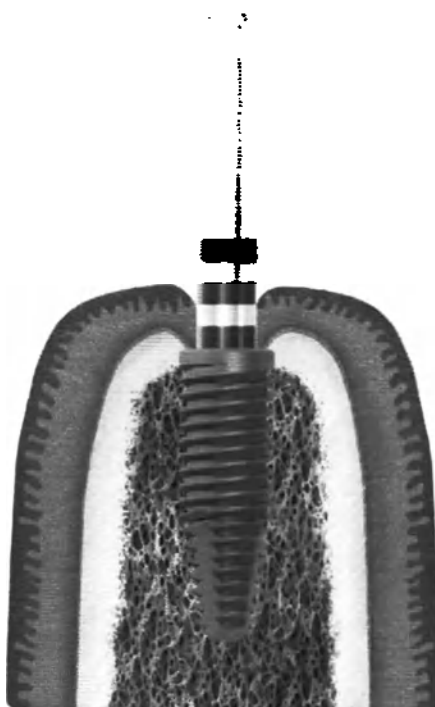

Размещение имплантата под костным краем альвеол приводит к образованию определенного количества костной ткани в коронарной части имплантата, что может привести к наталкиванию на компоненты при их адаптации к имплантатам.

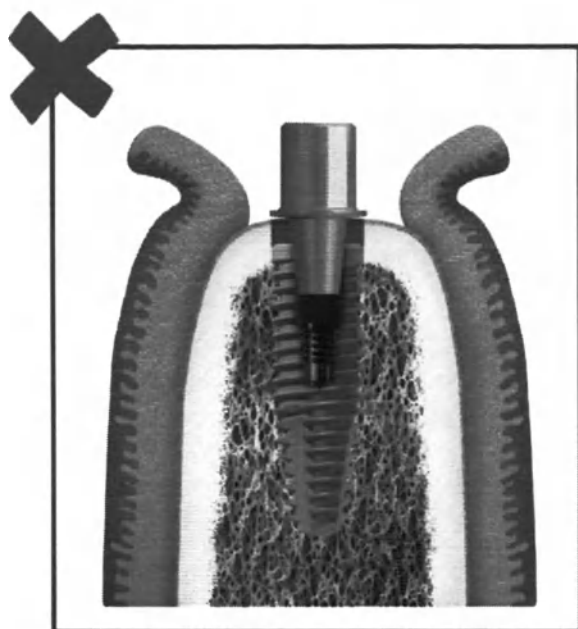

Пример неправильной ситуации, когда компонент наталкивается на костный гребень

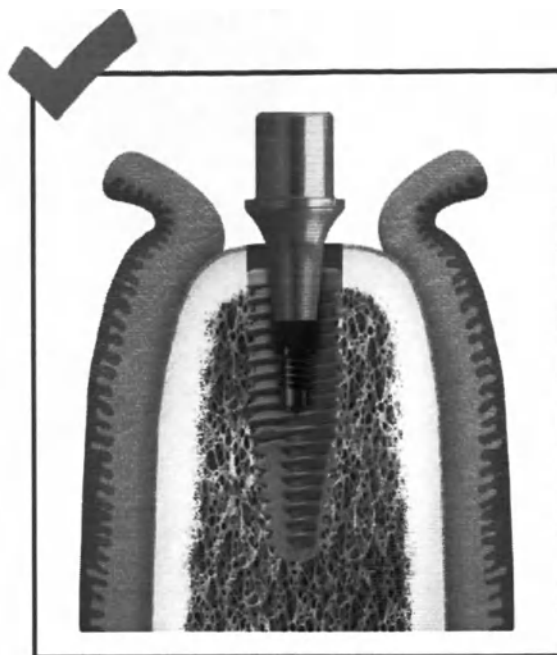

Пример правильной ситуации, когда компонент соответствует биологической ширине мягкой ткани

5 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями применяются в качестве опоры ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления жевательной функции в комбинации с внутрикостными имплантатами показаны для изготовления реставраций из нескольких единиц в случае, если предпочтение отдается винтовой фиксации ортопедической конструкции.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 120550 (Абатмент для дентального имплантата, постоянный, стандартный).

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями являются применяются совместно с дентальными имплантатами, непосредственно не контактируют с сердцем, центральной нервной системой, центральной системой кровообращения; не вызывают биологического эффекта и не рассасываются; не претерпевают в теле химических изменений. Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями вступают в контакт только со слизистой оболочкой полости рта. С учетом вышесказанного, на основании п.4.8, 4.8.1-4.8.4 Приказа №4н от 06.06.2012 Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями относятся к медицинским изделиям, имеющий класс потенциального риска 2а (медицинские изделия со средней степенью риска).

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия – 32.50.22.130 – Зубы искусственные.

6 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями имеют винтовое соединение с зубным имплантатом и служат опорой для зубной реставрации (например, для коронок и мостовидных протезов). Абатменты для дентальных имплантатов принимают на себя нагрузку, возникающую при жевании и кусании, передавая затем нагрузку на зубной имплантат.

Для фиксации изделия абатменты для дентальных имплантатов в комплекте к зубному имплантату необходим фиксирующий/ортопедический винт. Ряд методик протезирования разработаны для фиксации финальной реставрации на абатменте:

- абатменты «с фиксацией на винте», предназначенные для реставраций, фиксируемых к абатменту винтом;
- абатмент «с фиксацией на цементе», если другие (третичные) элементы протезирования, такие как колпачки, коронки или мостовидные протезы фиксированы на абатменте с помощью специального цемента;

Цифровые решения позволяют выполнять индивидуализированные финальные реставрации: заранее изготовленный абатмент, который является точным интерфейсом для зубных имплантатов (с винтовой фиксацией), будет использован для опоры верхней надстройки (суперструктуры), спроектированной в системе CAD/CAM.

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями включают в себя абатменты различных типов с различной конструкцией корпуса и шейки; при этом применяются очень схожие между собой хирургические процедуры.

В зависимости от специфического состояния пациента или его потребностей, наличие различных вариантов исполнений абатментов для дентальных имплантатов в комплекте позволяет выбрать наиболее оптимальный метод имплантации с целью восстановления жевательной функции пациента.

6.1. Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте:

6.1.1. Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC) являются промежуточным звеном между зубным имплантом и верхушкой зуба – зубной коронкой. Представляют собой готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, присоединяющийся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования в качестве вспомогательного средства в процессе ортопедической реабилитации.

Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC) предназначены для несъемных протезов на несколько единиц с винтовой фиксацией. Винтовая фиксация применяется в случаях, когда шахта винта расположена на окклюзионной поверхности бокового зуба или в области слепой ямки фронтального зуба без коррекции угла, а также при ограниченном межокклюзионном расстоянии.

Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC) имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента и цветом колпачка. Наличие различных диаметров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC) являются многокомпонентными изделиями, в состав которых входит абатмент и винт для фиксации абатмента. Тело абатмента состоит из двух частей: основание абатмента и пластиковая часть (выгораемый колпачок) для возможности регулирования высоты абатмента в процессе воскового моделирования на лабораторном этапе.

- Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, в комплекте с фиксирующим винтом	Артикул	36726
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	11,25 мм ± 0,05 мм
	Высота основания абатмента	5,55 мм ± 0,05 мм
	Высота пластиковой части абатмента	7,5 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	0,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	3,70 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины основания абатмента	3,30 мм ± 0,02 мм
	Диаметр вершины пластиковой части	4,0 мм ($\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ мм)

	Диаметр основания абатмента внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр основания абатмента внутренний 2	2,33 мм ± 0,04 мм
	Диаметр пластиковой части внутренний 1	3,2 мм ± 0,03 мм
	Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,6 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Материал основания абатмента	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
	Предел прочности	Не менее 750 МПа
	Материал пластиковой части абатмента	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin) Краситель Magenta MASTERBATCH EPN28153 PINK VAR
	Предел прочности	Не менее 75,84 МПа
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	13312
	Длина	7,325 ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,225 ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, в комплекте с фиксирующим винтом 	Артикул	36727
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	11,25 мм ± 0,05 мм
	Высота основания абатмента	5,55 мм ± 0,05 мм
	Высота пластиковой части абатмента	7,5 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	0,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,10 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины основания абатмента	3,30 мм ± 0,02 мм
	Диаметр вершины пластиковой части	4,0 мм ($^{+0,2}_{-0}$ мм)
	Диаметр основания абатмента внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
	Диаметр основания абатмента внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Диаметр пластиковой	3,2 мм ± 0,03 мм

	части внутренний 1	
	Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,6 мм ($+0,1$ -0 мм)
	Материал основания абатмента	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
	Предел прочности	Не менее 750 МПа
	Материал пластиковой части абатмента	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin) Краситель MASTERBATCH YELLOW PYN21966
	Предел прочности	Не менее 75,84 МПа
	Масса	1,0 г $\pm$ 0,1 г
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	12320
	Длина	7,3 $\pm$ 0,1 мм
	Диаметр головки	2,525 $\pm$ 0,025 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит:		
- абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC) – 1 шт.;		
- фиксирующий винт – 1 шт.;		
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.1.2 Абатменты с захватом золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатменты с захватом золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic являются промежуточным звеном между зубным имплантом и верхушкой зуба – зубной коронкой. Представляют собой готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, присоединяющийся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования на верхней или нижней челюсти и применяются в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции пациента.

Абатменты с захватом золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic предназначены для изготовления одиночных реставраций с винтовой фиксацией.

Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента и цветом колпачка. Наличие различных диаметров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Абатменты с захватом золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит абатмент и винт для фиксации абатмента. Тело абатмента состоит из двух частей: основание абатмента и

пластиковая часть (выгораемый колпачок) для возможности регулирования высоты абатмента в процессе воскового моделирования на лабораторном этапе.

- Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 4.3 RPL, в комплекте с фиксирующим винтом



Артикул	43511
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	12,2 ± 0,05 мм
Высота основания абатмента	5,08 мм ± 0,05 мм
Высота пластиковой части абатмента	10,16 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	1,016 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	4,27 мм ($^{+0.05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины основания абатмента	3,15 мм ($^{+0.05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины пластиковой части	3,81 мм ($^{+0.13}_{-0}$ мм)
Диаметр основания абатмента внутренний 1	3,40 мм ($^{+0.05}_{-0}$ мм)
Диаметр основания абатмента внутренний 2	2,54 мм ($^{+0.1}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренний 1	3,18 мм ($^{+0.05}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,54 мм ($^{+0.1}_{-0}$ мм)
Предел прочности	Не менее 750 МПа
Материал основания абатмента	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
Материал пластиковой части абатмента	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin) Краситель MASTERBATCH YELLOW PYN21966
Предел прочности	Не менее 75,84 МПа
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Включая фиксирующий винт	
Артикул	DP01-2760
Длина	7,37 мм ± 0,1 мм
Диаметр головки	2,44 мм ($^{+0.05}_{-0}$ мм)
Резьба	M2,0x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Абатмент с захватом золотой/пластиковый

Артикул	6105
Тип соединения	Внешнее шестигранное

**Direct Abutment
Engaging Gold/Plastic,
типоразмер 6.0
HL/RPL, в комплекте с
фиксирующим винтом**



Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	12,2 ± 0,05 мм
Высота основания абатмента	5,08 мм ± 0,05 мм
Высота пластиковой части абатмента	10,16 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	1,016 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	5,97 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины основания абатмента	3,30 мм ($^{+0,02}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины пластиковой части	3,81 мм ($^{+0,13}_{-0}$ мм)
Диаметр основания абатмента внутренний 1	3,59 мм ($^{+0,07}_{-0}$ мм)
Диаметр основания абатмента внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренний 1	3,18 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Предел прочности	Не менее 750 МПа
Материал основания абатмента	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
Материал пластиковой части абатмента	Полиоксиметилен (ПОМ) Acetal (Delrin)
Предел прочности	Не менее 75,84 МПа
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Включая фиксирующий винт	
Артикул	DP01-2760
Длина	7,37 мм ± 0,127 мм
Диаметр головки	2,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Резьба	M2,0x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

В комплект поставки изделия входит:

- абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic – 1 шт.;
- фиксирующий винт – 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.1.3 Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic являются промежуточным звеном между зубным имплантом и верхушкой

зуба – зубной коронкой. Представляют собой готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, присоединяющийся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования на верхней или нижней челюсти и применяются в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции пациента.

Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic предназначены для изготовления одиночных реставраций с винтовой фиксацией.

Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента. Наличие различных диаметров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит абатмент и винт для фиксации абатмента. Тело абатмента состоит из двух частей: основание абатмента и пластиковая часть (выгораемый колпачок) для возможности регулирования высоты абатмента в процессе воскового моделирования на лабораторном этапе.

- Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 5.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом



Артикул	5101
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	Без захвата
Высота общая	12,2 ± 0,05 мм
Высота основания абатмента	5,08 мм ± 0,127 мм
Высота пластиковой части абатмента	10,16 мм ± 0,25 мм
Высота шейки абатмента	1,016 мм ± 0,127 мм
Диаметр платформы абатмента	4,98 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины основания абатмента	3,15 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины пластиковой части	4,32 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Диаметр основания абатмента внутренний 1	4,22 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Диаметр основания абатмента внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренний 1	3,18 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Предел прочности	Не менее 750 МПа
Материал основания абатмента	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
Материал пластиковой части абатмента	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin)
Предел прочности	Не менее 75,84 МПа
Масса	4,0 г ± 0,1 г

	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	DP01-2760
	Длина	7,37 мм ± 0,127 мм
	Диаметр головки	2,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом	Артикул	6106
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	12,2 ± 0,05 мм
	Высота основания абатмента	5,08 мм ± 0,127 мм
	Высота пластиковой части абатмента	10,16 мм ± 0,25 мм
	Высота шейки абатмента	1,016 мм ± 0,127 мм
	Диаметр платформы абатмента	5,97 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины основания абатмента	3,15 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины пластиковой части	4,32 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Диаметр основания абатмента внутренний 1	4,22 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Диаметр основания абатмента внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Диаметр пластиковой части внутренний 1	3,18 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Предел прочности	Не менее 750 МПа
	Материал основания абатмента	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
	Материал пластиковой части абатмента	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin)
	Предел прочности	Не менее 75,84 МПа
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	DP01-2760
	Длина	7,37 мм ± 0,127 мм
	Диаметр головки	2,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V



		ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic – 1 шт.; - фиксирующий винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.1.4 Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком.

Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging - это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, предназначенные для применения в процессе ортопедической реабилитации для реставраций из нескольких единиц (от двух до трех единиц, без чрезмерного удлинения промежуточной части) при использовании винтовой фиксации для ортопедических конструкций.

Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging предназначены для использования на верхней или нижней челюсти в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции и эстетики пациента.

Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента и высоты шейки абатмента. Наличие различных типоразмеров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит абатмент, пластиковый выгораемый колпачок для воскового моделирования и прессования на лабораторном этапе, и ортопедический винт для фиксации абатмента.

- Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком



Артикул	300361
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	Без захвата
Высота общая	4,78 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	0,3 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	79531
Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24

	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком  	Артикул	300362
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	4,78 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,25 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	79531
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа

	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком 	Артикул	300363
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	4,78 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	0,30 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	5,30 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	79532
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	5,325 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим	Артикул	300364
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	5,78 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,25 мм ± 0,05 мм

винтом и выгораемым колпачком



Диаметр платформы абатмента	5,30 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	79532
Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	5,325 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
Включая ортопедический винт	
Артикул	78647
Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком



Артикул	300365
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	Без захвата
Высота общая	4,78 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	0,30 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	78163

	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,9 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком 	Артикул	300366
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Широкая (WP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	Без захвата
	Высота общая	5,73 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,25 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78163
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,9 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм

	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging – 1 шт.; - выгораемый колпачок – 1 шт.; - ортопедический винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.1.5 Абатменты универсальные On1 Universal Abutment, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком.

Абатменты универсальные On1 Universal Abutment - это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, предназначенные для применения в процессе ортопедической реабилитации для реставраций из нескольких единиц (от двух до трех единиц, без чрезмерного удлинения промежуточной части) при использовании винтовой фиксации для ортопедических конструкций.

Абатменты универсальные On1 Universal Abutment предназначены для использования на верхней или нижней челюсти в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции и эстетики пациента.

Абатменты универсальные On1 Universal Abutment имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента и высоты шейки абатмента. Наличие различных типоразмеров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Абатменты универсальные On1 Universal Abutment являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит абатмент, пластиковый выгораемый колпачок для воскового моделирования и прессования на лабораторном этапе, и ортопедический винт для фиксации абатмента.

- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер NP, длиной 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком



Артикул	38707
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	5,28 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	0,30 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	4,775 ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	79531
Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24

	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер NP, длиной 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком  	Артикул	38708
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	6,23 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,25 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г

 	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	79531
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24

	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа

	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер RP, длиной 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком  	Артикул	38709
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	5,28 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	0,30 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	5,30 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	79532
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	5,325 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер RP, длиной 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком	Артикул	38710
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	6,23 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,25 мм ± 0,05 мм

	Диаметр платформы абатмента	5,30 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	79532
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	5,325 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер WP, длиной 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком	Артикул	38711
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	5,28 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	0,30 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78163

	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,9 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер WP, длиной 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком  	Артикул	38712
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	6,23 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,25 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78163
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,9 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая ортопедический винт	
	Артикул	78647

	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - абатмент универсальный On1 Universal Abutment – 1 шт.; - выгораемый колпачок – 1 шт.; - ортопедический винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.1.6 Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium, в комплекте с ортопедическим винтом.

Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium - это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, предназначенные для применения в процессе ортопедической реабилитации для реставраций из нескольких единиц (от двух до трех единиц, без чрезмерного удлинения промежуточной части) при использовании цементной фиксации для ортопедических конструкций.

Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium предназначены для использования на верхней или нижней челюсти в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции и эстетики пациента.

Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента и высоты шейки абатмента. Наличие различных типоразмеров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит абатмент и ортопедический винт для фиксации абатмента.

- Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер NP, длиной 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом



Артикул	38713
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Цементная
Тип захвата	С захватом
Высота общая	7,45 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	0,3 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы абатмента	4,775 ± 0,05 мм
Диаметр вершины абатмента	3,46 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая ортопедический винт	
Артикул	78647
Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент	Артикул 38714

**эстетический On1
Esthetic Abutment
Titanium, типоразмер
RP, длиной 0.3 мм, в
комплекте с
ортопедическим
винтом**



Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Стандартная (RP)
Тип фиксации	Цементная
Тип захвата	С захватом
Высота общая	7,45 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	0,3 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы абатмента	5,30 ± 0,05 мм
Диаметр вершины абатмента	3,62 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая ортопедический винт	
Артикул	78647
Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

**- Абатмент
эстетический On1
Esthetic Abutment
Titanium, типоразмер
WP, длиной 0.3 мм, в
комплекте с
ортопедическим
винтом**



Артикул	38715
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Цементная
Тип захвата	С захватом
Высота общая	7,45 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	0,3 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы абатмента	6,515 ± 0,05 мм
Диаметр вершины абатмента	4,84 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая ортопедический винт	
Артикул	78647

	Длина	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium – 1 шт.; - ортопедический винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2. Принадлежности.

6.2.1. Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC) в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC) - это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы с ретенционными бороздками для улучшенной адгезии акрилового материала, присоединяющиеся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования в качестве временного вспомогательного средства в процессе ортопедической реабилитации с целью восстановления жевательной функции пациента.

Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC) в комбинации с внутрикостными имплантатами Nobel Biocare с коническим соединением показаны для изготовления одиночных и составных реставраций с винтовой фиксацией.

Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC) имеют встроенную функцию защелкивания. Функция защелкивания облегчает примерку временной конструкции, обеспечивая ее установку без использования винтов.

Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC) являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит абатмент и ортопедический винт для фиксации абатмента.

- Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, размер 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом



Артикул	38760
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	15,0 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	1,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	4,0 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	2,33 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая фиксирующий винт	
Артикул	13312
Длина	7,325 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V

		ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, размер 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом 	Артикул	38847
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	16,5 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,33 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	13312
	Длина	7,325 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, размер 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом	Артикул	38761
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	15,0 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	1,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины абатмента	3,4 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г

	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	13312
	Длина	7,325 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, размер 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом 	Артикул	38848
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	16,5 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины абатмента	3,4 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	13312
	Длина	7,325 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, размер 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом	Артикул	38762
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Широкая (WP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	8,5 мм ± 0,05 мм
	Высота шейки абатмента	1,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы	6,0 мм ± 0,05 мм



абатмента	
Диаметр вершины абатмента	3,4 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,75мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	2,06 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая фиксирующий винт	
Артикул	13312
Длина	7,325 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, размер 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом



Артикул	38849
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	10,0 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы абатмента	6,0 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины абатмента	3,4 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,75мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	2,06 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая фиксирующий винт	
Артикул	13312
Длина	7,325 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

В комплект поставки изделия входит:

- абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC) – 1 шт.;
- фиксирующий винт – 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.2 Основания Universal Base External Hex Connection, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом.

Основания Universal Base External Hex Connection – это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, присоединяющиеся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования на верхней или нижней челюсти и применяются в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции пациента.

Основания Universal Base External Hex Connection в комбинации с внутрикостными имплантатами показаны для одиночных конструкций с винтовой фиксацией и для реставраций из нескольких единиц, если используется цементная фиксация коронок.

Основания Universal Base External Hex Connection выпускается в двух вариантах высоты шейки (1,5 мм и 3,0 мм) и используется в качестве основания, которое склеивается с индивидуальными реставрациям с опорой на имплантаты, такими как мезоструктуры и коронки.

Основания Universal Base External Hex Connection являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит основание, винт для фиксации основания и выгораемый колпачок. Выгораемый колпачок помогает облегчить изготовление мезоструктуры и каркаса коронки на основе металла. Колпачок выгорает без остатка и может быть укорочен в соответствии с индивидуальной длиной.

- Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длиной 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом



Артикул	38227
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	5,66 мм ± 0,12 мм
Высота шейки абатмента	1,50 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	3,335 мм ± 0,025 мм
Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,85 мм ± 0,13 мм
Диаметр внутренний 2	1,62 мм ($+0,03$ $-0,02$ мм)
Диаметр внутренний 3	2,33 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	3,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	78164
Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform

		MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	10141
	Длина	7,325 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длиной 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом 	Артикул	38230
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	7,16 мм ± 0,12 мм
	Высота шейки абатмента	3,00 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	3,335 мм ± 0,025 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,85 мм ± 0,13 мм
	Диаметр внутренний 2	1,62 мм ($+0,03$ $-0,02$ мм)
	Диаметр внутренний 3	2,33 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	3,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78164
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	10141
	Длина	7,325 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,225 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI

	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длиной 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом 	Артикул	38228
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	5,66 мм ± 0,12 мм
	Высота шейки абатмента	1,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	4,085 мм ± 0,025 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	3,27 мм ($^{+0,03}_{-0,02}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,04 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 3	2,59 мм ($^{+0,05}_{-0,02}$ мм)
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	3,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78164
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	10142
	Длина	7,325 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,525 мм ± 0,25 мм
	Резьба	M2x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длиной 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и	Артикул	38231
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	7,16 мм ± 0,12 мм
	Высота шейки	3,00 мм ± 0,05 мм

фиксирующим винтом



абатмента	
Диаметр основания	4,085 мм ± 0,025 мм
Диаметр платформы абатмента	4,775 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	3,27 мм (^{+0,03} _{-0,02} мм)
Диаметр внутренний 2	2,04 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 3	2,59 мм (^{+0,05} _{-0,02} мм)
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	3,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	78164
Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
Включая фиксирующий винт	
Артикул	10142
Длина	7,325 мм ± 0,1 мм
Диаметр головки	2,525 мм ± 0,25 мм
Резьба	M2x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длиной 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом



Артикул	38229
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	C захватом
Высота общая	5,66 мм ± 0,12 мм
Высота шейки абатмента	1,50 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	5,08 мм ± 0,03 мм
Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	4,09 мм ± 0,13 мм
Диаметр внутренний 2	2,52 мм (^{+0,03} _{-0,02} мм)
Диаметр внутренний 3	3,55 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V

		ELI
	Масса	5,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78163
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,34 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,90 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	10143
	Длина	7,125 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	3,375 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2.5x0,45
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длиной 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом 	Артикул	38232
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Платформа	Широкая (WP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	7,16 мм ± 0,12 мм
	Высота шейки абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	5,08 мм ± 0,03 мм
	Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	4,09 мм ± 0,13 мм
	Диаметр внутренний 2	2,52 мм (^{+0,03} _{-0,02} мм)
	Диаметр внутренний 3	3,55 мм ± 0,05 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	5,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78163
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,34 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,90 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм

	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	10143
	Длина	7,125 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	3,375 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2.5x0,45
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - основание Universal Base External Hex Connection – 1 шт.; - выгораемый колпачок – 1 шт.; - фиксирующий винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.3 Основания Universal Base Tri-Channel Connection, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом.

Основания Universal Base Tri-Channel Connection - это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, присоединяющиеся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования на верхней или нижней челюсти и применяются в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции пациента.

Основания Universal Base Tri-Channel Connection в комбинации с внутрикостными имплантатами показаны для одиночных конструкций с винтовой фиксацией и для реставраций из нескольких единиц, если используется цементная фиксация коронок.

Основания Universal Base Tri-Channel Connection выпускается в двух вариантах высоты шейки (1,5 мм и 3,0 мм) и используется в качестве основания, которое склеивается с индивидуальными реставрациям с опорой на имплантаты, такими как мезоструктуры и коронки.

Основания Universal Base Tri-Channel Connection являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит основание, винт для фиксации основания и выгораемый колпачок. Выгораемый колпачок помогает облегчить изготовление мезоструктуры и каркаса коронки на основе металла. Колпачок выгорает без остатка и может быть укорочен в соответствии с индивидуальной длиной.

- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длиной 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом



Артикул	38171
Тип соединения	Внутреннее трехканальное
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	8,58 мм ± 0,1 мм
Высота шейки абатмента	1,50 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	3,54 мм (^{+0,02} / _{-0,03} мм)
Диаметр платформы абатмента	4,477 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	1,86 мм (^{+0,02} / _{-0,03} мм)
Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	78164
Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform

	MT24	
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	72833
	Длина	8,315 мм ± 0,085 мм
	Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длиной 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом	Артикул	38174
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	10,08 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	3,00 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	3,54 мм ($^{+0,02}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр платформы абатмента	4,477 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	1,86 мм ($^{+0,02}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	3,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78164
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм	
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм	
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа	
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24	
Включая фиксирующий винт		
Артикул	72833	
Длина	8,315 мм ± 0,085 мм	
Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм	
Резьба	M1,8x0,35	
Предел прочности	Не менее 860 МПа	
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI	



	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длиной 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом 	Артикул	38172
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	9,405 мм ± 0,115 мм
	Высота шейки абатмента	1,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	2,68 мм ± 0,01 мм
	Диаметр платформы абатмента	4,477 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,04 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78164
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	11811
	Длина	9,905 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длиной 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом	Артикул	38225
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	10,905 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	2,68 мм ± 0,01 мм



Диаметр платформы абатмента	4,477 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,04 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	78164
Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
Включая фиксирующий винт	
Артикул	11811
Длина	9,905 мм ± 0,1 мм
Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
Резьба	M2x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длиной 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом



Артикул	38173
Тип соединения	Внутреннее трехканальное
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	C захватом
Высота общая	9,405 мм ± 0,115 мм
Высота шейки абатмента	1,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	2,9 мм (^{+0,02} _{-0,03} мм)
Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,25 мм
Диаметр внутренний 1	2,04 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	6,0 г ± 0,1 мм
Включая выгораемый колпачок	
Артикул	78163

	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,34 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,90 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	11811
	Длина	9,905 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длиной 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом 	Артикул	38226
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Широкая (WP)
	Тип фиксации	Винтовая
	Тип захвата	С захватом
	Высота общая	10,905 мм ± 0,1 мм
	Высота шейки абатмента	3,0 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	2,9 мм (^{+0,02} / _{-0,03} мм)
	Диаметр платформы абатмента	6,515 мм ± 0,25 мм
	Диаметр внутренний 1	2,04 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	7,0 г ± 0,1 г
	Включая выгораемый колпачок	
	Артикул	78163
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,34 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,90 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	11811

	Длина	9,905 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - основание Universal Base Tri-Channel Connection – 1 шт.; - выгораемый колпачок – 1 шт.; - фиксирующий винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.4 Основания On1 Base Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом и держателем.

Основания On1 Base Conical Connection (CC) - это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, присоединяющиеся непосредственно к внутрикостному зубному имплантату и предназначенные для использования на верхней или нижней челюсти и применяются в качестве опоры искусственных зубов с целью восстановления жевательной функции пациента.

Основания On1 Base Conical Connection (CC) в комбинации с внутрикостными имплантатами показаны для одиночных конструкций с винтовой фиксацией и для реставраций из нескольких единиц, если используется цементная фиксация коронок.

Основания On1 Base Conical Connection (CC) выпускается в двух вариантах высоты шейки (1,75 мм и 2,5 мм) и используется в качестве основания, которое склеивается с индивидуальными реставрациям с опорой на имплантаты, такими как мезоструктуры и коронки.

Основания On1 Base Conical Connection (CC) являются многокомпонентными изделиями, в состав которого входит основание, винт для фиксации основания и держатель. Держатель помогает размещать основания On1 Base Conical Connection (CC) в имплантатах (особенно когда они расположены в постериальной области), так же он указывает ориентацию окклюзионной оси.

Основания On1 Base Conical Connection (CC) должны быть предварительно зафиксированы в имплантате с помощью трансфера. Затем трансфер должен быть удален, и с помощью отвертки произвести конечную затяжку с крутящим моментом не более 35 Нсм.

- Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длиной 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем



Артикул	38689
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Узкая (NP)
Тип фиксации	Цементная Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	4,05 мм ± 0,025 мм
Высота шейки основания	1,75 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	2,45 мм ± 0,01 мм
Диаметр платформы основания	4,775 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	2,25 мм ± 0,04 мм
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая держатель	
Артикул	79847
Высота	17,7 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	3,05 мм ± 0,2 мм

	Диаметр платформы	3,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,2 мм
	Предел прочности	Не менее 117 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	78639
	Длина	6,87 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M1,6x0,35
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длиной 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем 	Артикул	38690
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Тип фиксации	Цементная Винтовая
	Тип захвата	C захватом
	Высота общая	4,8 мм ± 0,025 мм
	Высота шейки основания	2,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	2,45 мм ± 0,01 мм
	Диаметр платформы основания	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,25 мм ± 0,04 мм
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая держатель	
	Артикул	79847
	Высота	17,7 мм ± 0,2 мм
	Диаметр основания	3,05 мм ± 0,2 мм
	Диаметр платформы	3,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,2 мм
	Предел прочности	Не менее 117 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	78660
	Длина	7,67 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм

	Резьба внешняя	M1,6x0,35
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длиной 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем 	Артикул	38691
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Тип фиксации	Цементная Винтовая
	Тип захвата	C захватом
	Высота общая	4,05 мм ± 0,025 мм
	Высота шейки основания	1,75 мм ± 0,05 мм
	Диаметр основания	2,85 мм ± 0,01 мм
	Диаметр платформы основания	5,30 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Резьба внутренняя	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая держатель	
	Артикул	79847
	Высота	17,7 мм ± 0,2 мм
	Диаметр основания	3,05 мм ± 0,2 мм
	Диаметр платформы	3,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,2 мм
	Предел прочности	Не менее 117 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	79849
	Длина	7,355 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M2,0x0,4
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Основание On1 Base Conical Connection	Артикул	38692
	Тип соединения	Внутреннее коническое

**(CC), типоразмер RP,
длинной 2.5 мм, в
комплекте с
фиксирующим винтом
и держателем**



Платформа	Стандартная (RP)
Тип фиксации	Цементная Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	4,8 мм ± 0,025 мм
Высота шейки основания	2,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	2,85 мм ± 0,01 мм
Диаметр платформы основания	5,30 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Резьба внутренняя	M2,0x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая держатель	
Артикул	79847
Высота	17,7 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	3,05 мм ± 0,2 мм
Диаметр платформы	3,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,2 мм
Предел прочности	Не менее 117 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
Включая фиксирующий винт	
Артикул	79860
Длина	8,105 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба внешняя	M2,0x0,4
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

**- Основание On1 Base
Conical Connection
(CC), типоразмер WP,
длинной 1.75 мм, в
комплекте с
фиксирующим винтом
и держателем**

Артикул	38693
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Цементная Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	4,45 мм ± 0,025 мм
Высота шейки основания	1,75 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	3,9 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы основания	6,515 мм ± 0,025 мм



Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Резьба внутренняя	M2,0x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая держатель	
Артикул	79847
Высота	17,7 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	3,05 мм ± 0,2 мм
Диаметр платформы	3,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,2 мм
Предел прочности	Не менее 117 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
Включая фиксирующий винт	
Артикул	78667
Длина	7,355 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба внешняя	M2,0x0,4
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длиной 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем

Артикул	38694
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Широкая (WP)
Тип фиксации	Цементная Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	5,2 мм ± 0,025 мм
Высота шейки основания	2,5 мм ± 0,05 мм
Диаметр основания	3,9 мм ± 0,05 мм
Диаметр платформы основания	6,515 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
Резьба внутренняя	M2,0x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая держатель	
Артикул	79847

	Высота	17,7 мм ± 0,2 мм
	Диаметр основания	3,05 мм ± 0,2 мм
	Диаметр платформы	3,5 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,2 мм
	Предел прочности	Не менее 117 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	78668
	Длина	8,105 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M2,0x0,4
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - основание On1 Base Conical Connection (CC) – 1 шт.; - держатель – 1 шт.; - фиксирующий винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.5 Заживляющие колпачки On1 Healing Cap.

Заживляющие колпачки On1 Healing Cap представляют из себя винты с плоской головкой, шлицом типа Polydrive и выполняют функции защиты внутреннего соединения абатментов и клинического винта основания, фиксирующего конструкцию к основанию.

Заживляющие колпачки On1 Healing Cap имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы абатмента и высоты головки. Наличие различных типоразмеров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

- Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 1.5 мм 	Артикул	38695
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота общая	3,25 мм ± 0,05 мм
	Высота головки	1,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	4,775 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
- Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 2.5 мм 	Артикул	38696
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота общая	4,25 мм ± 0,05 мм
	Высота головки	2,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	4,775 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
- Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 1.5 мм 	Артикул	38697
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота общая	3,25 мм ± 0,05 мм
	Высота головки	1,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	5,30 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
- Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 2.5 мм	Артикул	38698
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота общая	4,25 мм ± 0,05 мм
	Высота головки	2,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	5,30 мм ± 0,025 мм

	Диаметр головки	5,30 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
- Живляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 1.5 мм 	Артикул	38699
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота общая	3,25 мм ± 0,05 мм
	Высота головки	1,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	6,515 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
- Живляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 2.5 мм 	Артикул	38700
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота общая	4,25 мм ± 0,05 мм
	Высота головки	2,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	6,515 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
В комплект поставки изделия входит: - заживляющий колпачок On1 Healing Cap – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.6 Заживляющие колпачки On1 IOS Healing Cap, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем.

Заживляющие колпачки On1 IOS Healing Cap – это готовые ортопедические компоненты цилиндрической формы, предназначенные для использования на верхней или нижней челюсти с целью формирования контуров мягких тканей в период заживления после хирургического вмешательства по установке зубных имплантатов.

Так же заживляющие колпачки On1 IOS могут применяться при использовании на верхней или нижней челюсти для облегчения цифрового сбора данных ситуации в полости рта (оптического оттиска) таким образом, что может быть спроектирована и заказана в электронном виде индивидуальная CAD/CAM реставрация с использованием CAD-системы, а затем изготовлена индивидуальная реставрация в зуботехнической лаборатории, клинике или больнице.

Заживляющие колпачки On1 IOS Healing Cap имеют различные варианты исполнения, основное различие между которыми заключается в диаметре платформы и высоты. Наличие различных типоразмеров помогает стоматологу найти наилучшее решения для пациента.

Заживляющие колпачки On1 IOS Healing Cap поставляются в комплекте с держателем и ортопедическим винтом. Держатель помогает размещать заживляющие колпачки On1 IOS Healing Cap к основанию On1 Base, которое в свою очередь, фиксируется к внутрикостному имплантату, так же он указывает ориентацию окклюзионной оси. Затем трансфер должен быть удален, и зафиксирован ортопедическим винтом на основании On1 Base с крутящим моментом не более 35 Нсм.

- Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем



Артикул	38735
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Узкая (NP)
Высота общая	5,50 мм ± 0,08 мм
Высота колпачка	4,50 мм ± 0,03 мм
Диаметр основания	2,94 мм ± 0,025 мм
Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,025 мм
Диаметр вершины 1	4,043 мм ± 0,1 мм
Диаметр вершины 2	4,50 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 90 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK-OPTIMA
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая держатель	
Артикул	79848
Высота	18,00 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	1,289 мм ± 0,03 мм
Диаметр платформы	2,47 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 117 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK),

	VestaKEEP M20G	
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем 	Артикул	38734
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота общая	7,00 мм ± 0,08 мм
	Высота колпачка	6,00 мм ± 0,03 мм
	Диаметр основания	2,94 мм ± 0,025 мм
	Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр вершины 1	4,043 мм ± 0,1 мм
	Диаметр вершины 2	4,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 90 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK-OPTIMA
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая держатель	
	Артикул	79848
	Высота	18,00 мм ± 0,2 мм
	Диаметр основания	1,289 мм ± 0,03 мм
	Диаметр платформы	2,47 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,05 мм
	Предел прочности	Не менее 117 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Заживляющий колпачок On1 IOS	Артикул	38737
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1

**Healing Cap,
типоразмер RP, длина
4.5 мм, в комплекте с
ортопедическим
винтом и держателем**



Платформа	Стандартная (RP)
Высота общая	5,50 мм ± 0,08 мм
Высота колпачка	4,50 мм ± 0,03 мм
Диаметр основания	2,94 мм ± 0,025 мм
Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,025 мм
Диаметр вершины 1	4,465 мм ± 0,1 мм
Диаметр вершины 2	5,00 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 90 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK- OPTIMA
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Включая держатель	
Артикул	79848
Высота	18,00 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	1,289 мм ± 0,03 мм
Диаметр платформы	2,47 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 117 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
Включая фиксирующий винт	
Артикул	78647
Длина	4,50 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

**- Заживляющий
колпачок On1 IOS
Healing Cap,
типоразмер RP, длина
6 мм, в комплекте с
ортопедическим
винтом и держателем**

Артикул	38736
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Стандартная (RP)
Высота общая	7,00 мм ± 0,08 мм
Высота колпачка	6,00 мм ± 0,03 мм
Диаметр основания	2,94 мм ± 0,025 мм
Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,025 мм
Диаметр вершины 1	4,465 мм ± 0,1 мм
Диаметр вершины 2	5,00 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 90 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK- OPTIMA
Масса	1,0 г ± 0,1 г




Включая держатель

Артикул	79848
Высота	18,00 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	1,289 мм ± 0,03 мм
Диаметр платформы	2,47 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 117 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G

Включая фиксирующий винт

Артикул	78647
Длина	4,50 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 4 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем

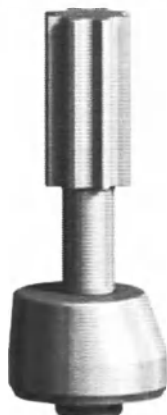

Артикул	38739
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Широкая (WP)
Высота общая	5,00 мм ± 0,08 мм
Высота колпачка	4,00 мм ± 0,03 мм
Диаметр основания	2,94 мм ± 0,025 мм
Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,025 мм
Диаметр вершины 1	5,809 мм ± 0,1 мм
Диаметр вершины 2	6,60 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
Предел прочности	Не менее 90 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK-ОПТИМА
Масса	1,0 г ± 0,1 г

Включая держатель

Артикул	79848
Высота	18,00 мм ± 0,2 мм
Диаметр основания	1,289 мм ± 0,03 мм
Диаметр платформы	2,47 мм ± 0,03 мм
Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,05 мм
Предел прочности	Не менее 117 МПа
Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G

Включая фиксирующий винт

Артикул	78647
Длина	4,50 мм ± 0,05 мм

	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем	Артикул	38738
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота общая	6,00 мм ± 0,08 мм
	Высота колпачка	5,00 мм ± 0,03 мм
	Диаметр основания	2,94 мм ± 0,025 мм
	Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,025 мм
	Диаметр вершины 1	5,809 мм ± 0,1 мм
	Диаметр вершины 2	6,60 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,44 мм ± 0,025 мм
	Предел прочности	Не менее 90 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK-OPTIMA
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Включая держатель	
	Артикул	79848
	Высота	18,00 мм ± 0,2 мм
	Диаметр основания	1,289 мм ± 0,03 мм
	Диаметр платформы	2,47 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	4,0 мм ± 0,05 мм
	Предел прочности	Не менее 117 МПа
	Материал	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G
	Включая фиксирующий винт	
	Артикул	78647
	Длина	4,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - заживляющий колпачок On1 Healing Cap – 1 шт.; - ортопедический винт – 1 шт.; - держатель – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.7 Колпачки выгораемые для основания Universal Base Burn-out Coping.

Колпачки выгораемые для основания Universal Base Burn-out Coping – это протезные компоненты цилиндрической формы, предназначенные для лабораторного использования на этапах моделирования восковой композиции и отливки основания протеза, прикрученного или зацементированного на основаниях Universal Base. Они имеют внешние точки для фиксации воска и оснащены внешними фиксаторами и подходят для изготовления оснований одиночных протезов, если используется винтовая фиксация, и конструкций на несколько единиц в случае цементной фиксации коронок.

Колпачки выгораемые для основания Universal Base Burn-out Coping помогают облегчить изготовление мезоструктуры и каркаса коронки на основе металла. Колпачки выгорают без остатка и могут быть укорочены в соответствии с индивидуальной длиной.

- Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP 	Артикул	38221
	Высота	12,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	4,80 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,43 мм ± 0,08 мм
	Диаметр внутренний 1	3,48 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
- Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер WP 	Артикул	38222
	Высота	12,0 мм ± 0,25 мм
	Диаметр основания	6,54 мм ± 0,03 мм
	Диаметр вершины	3,34 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,90 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 2	2,63 мм ± 0,04 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 65,0 МПа
	Материал	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24
В комплект поставки изделия входит: - колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.8 Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом.

Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic – это протезные компоненты цилиндрической формы, предназначенные в качестве опоры ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления жевательной функции.

Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic используются в качестве основы и опоры для различных ортопедических конструкций – от одиночных коронок до несъемных конструкций для частичного и полного протезирования с цементной или винтовой фиксацией. Поставляется в комплекте с винтом. Винт предназначен для фиксации колпачков на абатментах. Тело колпачка состоит из двух частей: основания и пластиковая часть (выгораемый колпачок).

**- Колпачок
золотой/пластиковый
PME Coping
Gold/Plastic, в
комплекте с винтом**



Артикул	2149
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Тип фиксации	Винтовая
Тип захвата	С захватом
Высота общая	12, 57 ± 0,1 мм
Высота основания	5,08 мм ± 0,25 мм
Высота шейки	0,51 мм ± 0,25 мм
Диаметр платформы	4,45 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины	3,15 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 1	3,73 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 2	1,88 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 3	2,54 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Предел прочности	Не менее 750 МПа
Материал	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Высота пластиковой части	10,16 мм ± 0,1 мм
Диаметр пластиковой части внешний	3,81 мм ($^{+0,13}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренний 1	3,18 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр пластиковой части внутренни 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Материал	Пластик Полиоксиметилен Acetal (Delrin)
Включая винт	
Артикул	DP-1392
Длина	5,91 мм ± 0,05 мм
Диаметр головки	2,46 мм ± 0,02 мм
Резьба	M1,8x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

В комплект поставки изделия входит:

- колпачок золотой/пластиковый PME Coving Gold/Plastic – 1 шт.;
- винт – 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.9 Цилиндры золотые с уступом конические Gold Cylinder with Chamfer Conical.

Цилиндры золотые с уступом конические Gold Cylinder with Chamfer Conical – это протезные компоненты цилиндрической формы, предназначенные в качестве опоры ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления жевательной функции.

Цилиндры золотые с уступом конические Gold Cylinder with Chamfer Conical используются в качестве основы и опоры для различных ортопедических конструкций – от одиночных коронок до несъемных конструкций для частичного и полного протезирования с цементной или винтовой фиксацией.

- Цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical 	Артикул	DCB 141-0
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Тип фиксации	Винтовая
	Высота общая	5,70 мм $\pm$ 0,05 мм
	Высота шейки	0,30 мм ($^{+0}_{-0.15}$ мм)
	Диаметр платформы	4,80 мм $\pm$ 0,05 мм
	Диаметр вершины	3,50 мм $\pm$ 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,10 мм ($^{+0.05}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	1,50 мм ($^{+0.1}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 3	2,40 мм ($^{+0.1}_{-0}$ мм)
	Предел прочности	Не менее 750 МПа
	Материал	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)
	Масса	4,0 г $\pm$ 0,1 г
В комплект поставки изделия входит: - цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical - 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.10 Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl) имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl) рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl) ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl) поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт с кольцом O-ring, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, диаметр 3.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring	Артикул	29485
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	10,02 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	3,53 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	5,46 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	1,855 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
	Включая винт	
	Артикул	11812
	Длина	18,8 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа



	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, диаметр 4.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	33466
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	9,99 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	4,45 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины	5,44 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	1,83 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	11812
	Длина	18,8 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, диаметр 4.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring	Артикул	33539
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	9,99 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	4,27 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	5,44 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,03 мм ($^{+0,13}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	11813

	Длина	20,6 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, диаметр 5.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	33467
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	9,99 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	5,25 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины	5,44 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,03 мм ($^{+0,13}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	11813
	Длина	20,6 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray	Артикул	33468
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Широкая (WP)
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	9,99 мм ± 0,15 мм

NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, диаметр 5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Диаметр платформы	4,97 мм ($+0,06$ -0 мм)
	Диаметр вершины	5,44 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,03 мм ($+0,13$ -0 мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($+0,1$ -0 мм)
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	11813
	Длина	20,6 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring	Артикул	29493
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Широкая (WP)
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	10,04 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	5,995 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	5,46 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	2,038 мм ± 0,032 мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	11813
	Длина	20,6 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	

	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм $\pm 0,127$ мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm 0,127$ мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	30039
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	6.0
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	10,04 мм $\pm 0,15$ мм
	Диаметр платформы	5,995 мм $\pm 0,05$ мм
	Диаметр вершины	5,46 мм $\pm 0,05$ мм
	Диаметр внутренний 1	2,038 мм $\pm 0,032$ мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм $\pm 0,05$ мм
	Масса	1,0 г $\pm 0,1$ г
	Предел прочности	Не менее 860 Мпа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	11813
	Длина	20,6 мм $\pm 0,1$ мм
	Диаметр	2,465 мм $\pm 0,025$ мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм $\pm 0,127$ мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm 0,127$ мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace®	Артикул	33469
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	6.0
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	9,99 мм $\pm 0,15$ мм
	Диаметр платформы	6,95 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)

**(NobRpl),
типоразмер 6.0,
диаметр 7 мм, в
комплекте с
винтом и кольцом
O-ring**



Диаметр вершины	5,44 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 1	2,03 мм ($^{+0,13}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
Включая винт	
Артикул	11813
Длина	20,6 мм ± 0,1 мм
Диаметр	2,465 мм ± 0,025 мм
Резьба	M2,0x0,4
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
Предел прочности	Не менее 6 МПа
Материал	Силикон RS00170

В комплект поставки изделия входит:

- трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl) – 1 шт.;
- винт – 1 шт.;
- кольцо O-ring;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.11 Трансферы для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом.

Трансферы для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом



Артикул	31708
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Показания	Несколько единиц
Высота	7,62 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	4,445 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины	6,83 мм ± 0,1 мм
Диаметр внутренний 1	3,7 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 2	1,8 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 3	2,54 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 515 МПа
Материал	Нержавеющая сталь AISI 316
Включая винт	
Артикул	DP01-2122
Длина	19,81 мм ± 0,254 мм
Диаметр	2,43 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Резьба	M1,8x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

В комплект поставки изделия входит:

- трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray – 1 шт.;
- винт – 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.12 Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт с кольцом O-ring, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.25HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring



Артикул	31530
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Показания	Одиночные конструкции
Высота	11,05 мм $\pm$ 0,1 мм
Диаметр платформы	3,27 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр вершины	5,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 1	2,007 мм ($^{+0,063}_{-0}$ мм)
Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
Масса	4,0 г $\pm$ 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Включая винт	
Артикул	DP01-1799
Длина	19,05 мм $\pm$ 0,1 мм
Диаметр	2,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
Резьба	M1,8x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм $\pm$ 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm$ 0,127 мм
Предел прочности	Не менее 6 МПа
Материал	Силикон RS00170

- Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.5RPL, диаметр 3.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	31531
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	11,05 мм $\pm 0,1$ мм
	Диаметр платформы	3,50 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины	5,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	2,007 мм ($^{+0,063}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Масса	4,0 г $\pm 0,1$ г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
	Включая винт	
	Артикул	DP01-1799
	Длина	19,05 мм $\pm 0,1$ мм
	Диаметр	2,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм $\pm 0,127$ мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm 0,127$ мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 4.3RPL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring	Артикул	31532
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	11,05 мм $\pm 0,1$ мм
	Диаметр платформы	4,47 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины	5,44 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	2,007 мм ($^{+0,063}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($^{+0,1}_{-0}$ мм)
	Масса	4,0 г $\pm 0,1$ г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
	Включая винт	
	Артикул	DP01-1799
	Длина	19,05 мм $\pm 0,1$ мм

	Диаметр	2,44 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм $\pm 0,127$ мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm 0,127$ мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 5.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	31533
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	11,05 мм $\pm 0,1$ мм
	Диаметр платформы	4,98 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр вершины	5,44 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр внутренний 1	2,007 мм ($+0,063$ -0 мм)
	Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($+0,1$ -0 мм)
	Масса	4,0 г $\pm 0,1$ г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Включая винт	
	Артикул	DP01-1799
	Длина	19,05 мм $\pm 0,1$ мм
	Диаметр	2,44 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм $\pm 0,127$ мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm 0,127$ мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly	Артикул	31534
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	11,05 мм $\pm 0,1$ мм

**Hex Open Tray,
типоразмер 6.0
HL/RPL, диаметр
6, в комплекте с
винтом и кольцом
O-ring**



Диаметр платформы	5,97 мм ($+0,05$ -0 мм)
Диаметр вершины	5,97 мм ($+0,05$ -0 мм)
Диаметр внутренний 1	2,007 мм ($+0,063$ -0 мм)
Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($+0,1$ -0 мм)
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Включая винт	
Артикул	DP01-1799
Длина	19,05 мм ± 0,1 мм
Диаметр	2,44 мм ($+0,05$ -0 мм)
Резьба	M1,8x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
Предел прочности	Не менее 6 МПа
Материал	Силикон RS00170

**- Трансфер для
открытой ложки
Transfer Assembly
Hex Open Tray,
типоразмер 3.8/4.5
HL, диаметр 4.5, в
комплекте с
винтом и кольцом
O-ring**

Артикул	31709
Тип соединения	Внешнее шестигранное
Показания	Одиночные конструкции
Высота	11,05 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	4,07 мм ($+0,05$ -0 мм)
Диаметр вершины	5,44 мм ($+0,05$ -0 мм)
Диаметр внутренний 1	2,01 мм ($+0,06$ -0 мм)
Диаметр внутренний 2	2,54 мм ($+0,1$ -0 мм)
Масса	4,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Включая винт	
Артикул	DP01-1799
Длина	19,05 мм ± 0,1 мм
Диаметр	2,44 мм ($+0,05$ -0 мм)
Резьба	M1,8x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм $\pm 0,127$ мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм $\pm 0,127$ мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
В комплект поставки изделия входит: - трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray – 1 шт.; - винт – 1 шт.; - кольцо O-ring; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.13 Трансферы, уровня имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом.

Трансферы, уровня имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы, уровня имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов, уровня имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы, уровня имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом	Артикул	29603
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Показания	Одиночные конструкции
	Высота	11,69 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	2,845 мм ± 0,025 мм
	Диаметр вершины	4,315 мм ± 0,015 мм
	Диаметр внутренний 1	2,085 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,855 мм ± 0,025 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
	Включая винт	
	Артикул	12530
	Длина	16,68 мм ± 0,06 мм
	Диаметр	3,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба	M1,9x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
		
В комплект поставки изделия входит: - трансфер, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP – 1 шт.; - винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.14 Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт с кольцом O-ring, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring



Артикул	36930
Тип соединения	Внутреннее коническое
Платформа	Узкая (NP)
Показания	Несколько единиц
Высота	14,00 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	3,54 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	3,54 мм ± 0,1 мм
Диаметр внутренний 1	1,70 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Включая винт	
Артикул	71822
Длина	23,70 мм ± 0,2 мм
Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм

	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	36931
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Показания	Несколько единиц
	Высота	14,00 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	3,92 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
	Диаметр внутренний 1	2,10 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	71823
	Длина	23,70 мм ± 0,2 мм
	Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring	Артикул	37858
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Широкая (WP)
	Показания	Несколько единиц
	Высота	14,00 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	5,10 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
	Диаметр внутренний 1	2,10 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	2,59 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	71823
	Длина	23,70 мм ± 0,2 мм

	Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ±0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ±0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
В комплект поставки изделия входит: - трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge – 1 шт.; - винт – 1 шт.; - кольцо O-ring; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.15 Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт с кольцом O-ring, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring



Артикул	38728
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Узкая (NP)
Высота	11,00 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,59 мм ± 0,05 мм
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
Включая винт	
Артикул	79074
Длина	18,50 мм ± 0,1 мм
Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
Предел прочности	Не менее 6 МПа
Материал	Силикон RS00170

- Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coring Open Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring



Артикул	38729
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Стандартная (RP)
Высота	11,00 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,59 мм ± 0,05 мм
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Включая винт	
Артикул	79074
Длина	18,50 мм ± 0,1 мм
Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
Предел прочности	Не менее 6 МПа
Материал	Силикон RS00170

- Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coring Open Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring

Артикул	38730
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Широкая (WP)
Высота	11,00 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,59 мм ± 0,05 мм
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Включая винт	
Артикул	79074
Длина	18,50 мм ± 0,1 мм
Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа

	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ±0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ±0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
В комплект поставки изделия входит:		
- трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray – 1 шт.;		
- винт – 1 шт.;		
- кольцо O-ring;		
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.16 Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации установленного имплантата посредством методики снятия оттиска с учетом конкретного случая, принимая во внимание указанные диаметры и допуски компонентов.

Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска открытой ложкой (трансфер остается в оттиске после выведения последнего из полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging поставляется в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт с кольцом O-ring, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring



Артикул	300367
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Узкая (NP)
Высота	10,50 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,05 мм
Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	2,59 мм ± 0,05 мм
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Включая винт	
Артикул	79074
Длина	18,50 мм ± 0,1 мм
Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм
Включая кольцо O-Ring	
Артикул	DP01-2343
Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
Предел прочности	Не менее 6 МПа

	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 	Артикул	300368
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	10,50 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
	Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,59 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	79074
	Длина	18,50 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ± 0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ± 0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
- Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring	Артикул	300369
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота	10,50 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	3,60 мм ± 0,1 мм
	Диаметр внутренний 1	2,52 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	2,59 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	79074
	Длина	18,50 мм ± 0,1 мм
	Диаметр	4,00 мм ± 0,5 мм

	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Включая кольцо O-Ring	
	Артикул	DP01-2343
	Диаметр	2,51 мм ±0,127 мм
	Диаметр отверстия	1,50 мм ±0,127 мм
	Предел прочности	Не менее 6 МПа
	Материал	Силикон RS00170
В комплект поставки изделия входит: - трансфер без захвата для открытой ложки Onl Impression Coping Open Tray Non-Engaging – 1 шт.; - винт – 1 шт.; - кольцо O-ring; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.17 Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, в комплекте с винтом.

Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации имплантата, установленного в ротовой полости посредством методики снятия оттиска.

Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска закрытой ложкой (трансфер после выведения оттиска из полости рта остается в полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферов для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray поставляются в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит винт, используемый для фиксации трансфера над имплантатом во время снятия оттиска и в аналоге в процессе получения гипсовой модели.

- Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом 	Артикул	38725
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота	10,10 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр вершины	2,40 мм ± 0,03 мм
	Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 3	1,85 мм ± 0,05 мм
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая винт	
	Артикул	79500
	Длина	12,80 мм ± 0,09 мм
	Диаметр	3,20 мм ± 0,05 мм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер	Артикул	38726
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	10,10 мм ± 0,1 мм
	Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,025 мм
	Диаметр вершины	2,85 мм ± 0,03 мм

RP, в комплекте с винтом



Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	1,85 мм ± 0,05 мм
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Включая винт	
Артикул	79072
Длина	12,80 мм ± 0,09 мм
Диаметр	3,30 мм ± 0,05 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом



Артикул	38727
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Широкая (WP)
Высота	10,10 мм ± 0,1 мм
Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,025 мм
Диаметр вершины	2,85 мм ± 0,03 мм
Диаметр внутренний 1	2,35 мм ± 0,05 мм
Диаметр внутренний 2	1,70 мм ± 0,025 мм
Диаметр внутренний 3	1,85 мм ± 0,05 мм
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
Включая винт	
Артикул	79072
Длина	12,80 мм ± 0,09 мм
Диаметр	3,30 мм ± 0,05 мм
Резьба	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

В комплект поставки изделия входит:

- трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray – 1 шт.;
- винт – 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.18 Трансферы Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment.

Трансферы Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment имеют конической форму и используются для трансфера положения и ориентации имплантата, установленного в ротовой полости посредством методики снятия оттиска.

Использование трансферов Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

- Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment	Артикул	DCB 106-0
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Высота	8,00 мм ± 0,05 мм
	Диаметр платформы	4,80 мм ± 0,05 мм
	Диаметр вершины	5,00 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 1	4,10 мм ($^{+0}_{-0.05}$ мм)
	Диаметр внутренний 2	1,50 мм ($^{+0.01}_{-0}$ мм)
	Диаметр внутренний 3	2,70 мм ± 0,05 мм
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)
	В комплект поставки изделия входит:	
	- трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment- 1 шт.;	
	- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;	

6.2.19 Трансферные пины с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25.

Трансферные пины с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используются для трансфера положения и ориентации имплантата, установленного в ротовой полости посредством методики снятия оттиска.

Трансферные пины с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 рекомендуется использовать вместе с методикой снятия оттиска закрытой ложкой (трансфер после выведения оттиска из полости рта остается в полости рта) для восстановления одного или нескольких зубов. Использование трансферных пинов с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 ограничено по времени, и устанавливать их следует в полости рта на имплантат только во время снятия оттиска. После получения оттиска данные изделия следует извлечь из ротовой полости и использовать для изготовления гипсовой модели.

- Трансферный пин с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25	Артикул	31529
	Высота	13,41 мм ± 0,127 мм
	Диаметр платформы	3,27 мм ($^{+0,05}_{-0}$ мм)
	Диаметр вершины	2,54 мм ($^{+0,03}_{-0}$ мм)
	Резьба	M2,5x0,45
	Масса	3,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI

В комплект поставки изделия входит:

- трансферный пин с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 – 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.20 Аналоги основания On1 Base Replica, в комплектах с клиническими винтами.

Аналоги основания On1 Base Replica имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используется в лабораторных условиях в процессе изготовления конструкции для передачи формы и положения платформы основания On1.

Аналоги основания On1 Base Replica предназначены для использования на этапе лабораторных работ при получении гипсовой модели для изготовления протеза на имплантате, включая воспроизводство размеров и размещения основания On1 или протезного связующего звена. Аналоги основания On1 Base Replica выступают в роли заменителя зубного имплантата и основания On1.

Аналоги основания On1 Base Replica поставляются в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит клинический винт, используемый для временной фиксации реставраций, каркасов мостовидных протезов к аналогам основания On1 Base Replica в гипсовых моделях.

- Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом 	Артикул	38731
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота	11,75 мм ± 0,2 мм
	Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,025 мм
	Диаметр основания	3,50 мм ± 0,01 мм
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая клинический винт	
	Артикул	78639
	Длина	6,87 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M1,6x0,35
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом	Артикул	38732
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	11,75 мм ± 0,2 мм
	Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,025 мм
	Диаметр основания	3,90 мм ± 0,01 мм
	Резьба внутренняя	M2,0x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2

	Включая клинический винт	
	Артикул	79849
	Длина	7,335 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M2,0x0,40
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом 	Артикул	38733
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота	11,75 мм ± 0,2 мм
	Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,025 мм
	Диаметр основания	5,10 мм ± 0,01 мм
	Резьба внутренняя	M2,0x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая клинический винт	
	Артикул	78667
	Длина	7,335 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M2,0x0,40
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит: - аналог основания On1 Base Replica– 1 шт.; - клинический винт – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.21 Аналоги On1 IOS Replica, в комплектах с клиническими винтами.

Аналоги On1 IOS Replica имеют цилиндрическую форму с вогнутыми гранями и используется в лабораторных условиях в процессе изготовления конструкции для передачи формы и положения платформы основания On1.

Аналоги On1 IOS Replica предназначены для использования на этапе лабораторных работ при получении гипсовой модели для изготовления протеза на имплантате, включая воспроизводство размеров и размещения основания On1 или протезного связующего звена. Аналоги On1 IOS Replica выступают в роли заменителя зубного имплантата и основания On1.

Аналоги On1 IOS Replica поставляются в виде многокомпонентного изделия, в состав которого входит клинический винт, используемый для временной фиксации реставраций, каркасов мостовидных протезов к аналогам On1 IOS Replica в гипсовых моделях.

- Аналог On1 IOS Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом



Артикул	38740
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Узкая (NP)
Высота	9,00 мм ± 0,125 мм
Диаметр платформы	4,775 мм ± 0,025 мм
Диаметр основания	2,88 мм ± 0,02 мм
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2

Включая клинический винт

Артикул	78639
Длина	6,87 мм ± 0,1 мм
Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
Резьба внешняя	M1,6x0,35
Резьба внутренняя	M1,6x0,35
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
Вращающий момент	Не более 35 Нсм

- Аналог On1 IOS Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом

Артикул	38741
Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
Платформа	Стандартная (RP)
Высота	9,00 мм ± 0,125 мм
Диаметр платформы	5,30 мм ± 0,03 мм
Диаметр основания	3,64 мм ± 0,02 мм
Резьба внутренняя	M2,0x0,40
Масса	1,0 г ± 0,1 г
Предел прочности	Не менее 860 МПа
Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2

Включая клинический винт

	Артикул	79849
	Длина	7,335 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M2,0x0,40
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
- Аналог On1 IOS Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом 	Артикул	38742
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота	9,00 мм ± 0,125 мм
	Диаметр платформы	6,515 мм ± 0,03 мм
	Диаметр основания	3,64 мм ± 0,02 мм
	Резьба внутренняя	M2,0x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая клинический винт	
	Артикул	78667
	Длина	7,335 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Резьба внешняя	M2,0x0,40
	Резьба внутренняя	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
В комплект поставки изделия входит:		
- аналог On1 IOS Replica– 1 шт.;		
- клинический винт – 1 шт.;		
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.22. Лабораторные винты угловые Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl).

Лабораторные винты угловые Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl) представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, изготавливаемые из титанового сплава, предназначенные для фиксации конструкций на аналогах угловых абатментов.

Лабораторные винты угловые Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl) используются для временной фиксации окклюзионных валиков, каркасов мостовидных протезов и т.д. к аналогам в гипсовых моделях.

- Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP 	Артикул	31166
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Длина	7,00 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,45 мм ($^{+0}_{-0,05}$ мм)
	Длина резьбовой части	2,00 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,8x0,35
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
- Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP 	Артикул	31167
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Длина	9,00 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,45 мм ($^{+0}_{-0,05}$ мм)
	Длина резьбовой части	2,00 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
В комплект поставки изделия входит: - лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl) – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.23. Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl).

Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl) представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, изготавливаемые из титанового сплава, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl) используются для временной фиксации окклюзионных валиков, каркасов мостовидных протезов и т.д. к аналогам в гипсовых моделях.

- Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP 	Артикул	31170
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Длина	8,315 мм ± 0,085 мм
	Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
	Длина резьбовой части	2,29 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,8x0,35
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
В комплект поставки изделия входит: - лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		
- Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп.	Артикул	29293
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP), Широкая (WP), 6.0
	Длина	9,905 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,465 мм ± 0,025 мм
	Длина резьбовой части	3,18 мм ± 0,1 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI

		
В комплект поставки изделия входит: - лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп. – 5 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.24. Лабораторные винты, уровня имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0.

Лабораторные винты, уровня имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, изготавливаемые из титанового сплава, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Лабораторные винты, уровня имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 используются для временной фиксации окклюзионных валиков, каркасов мостовидных протезов и т.д. к аналогам в гипсовых моделях.

- Лабораторный винт, уровень имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 	Артикул	36805
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	3.0
	Длина	6,70 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	1,83 мм ± 0,02 мм
	Длина резьбовой части	2,20 мм ± 0,1 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,4x0,30
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
В комплект поставки изделия входит: - лабораторный винт, уровень имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.25. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP.

Лабораторные винты, уровня имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, изготавливаемые из титанового сплава, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Лабораторные винты, уровня имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP используются для временной фиксации окклюзионных валиков, каркасов мостовидных протезов и т.д. к аналогам в гипсовых моделях.

- Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP 	Артикул	31169
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Платформа	Широкая (WP)
	Длина	7,125 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	3,375 мм ± 0,025 мм
	Длина резьбовой части	2,50 мм ± 0,1 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,5x0,45
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI

В комплект поставки изделия входит:

- лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP – 1 шт.;

- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.26. Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упаковке.

Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упаковке. представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, изготавливаемые из титанового сплава, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упаковке. используются для временной фиксации окклюзионных валиков, каркасов мостовидных протезов и т.д. к аналогам в гипсовых моделях.

- Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упаковке 	Артикул	37895
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP), Широкая (WP)
	Длина	7,30 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,525 мм ± 0,025 мм
	Длина резьбовой части	2,50 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
В комплект поставки изделия входит: - Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упаковке; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.27. Лабораторные винты ортопедические On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP.

Лабораторные винты ортопедические On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, изготавливаемые из титанового сплава, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Лабораторные винты ортопедические On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP используются для временной фиксации окклюзионных валиков, каркасов мостовидных протезов и т.д. к аналогам в гипсовых моделях.

- Лабораторный винт ортопедический On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP 	Артикул	38751
	Тип соединения	Внешнее шестигранное On1
	Платформа	Узкая (NP), Стандартная (RP), Широкая (WP)
	Длина	4,50 мм ± 0,05 мм
	Диаметр головки	2,275 мм ± 0,025 мм
	Длина резьбовой части	1,925 мм ± 0,1 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,6x0,35
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	В комплект поставки изделия входит: - лабораторный винт ортопедический On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;	

6.2.28. Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм используются для временной фиксации окклюзионных валиков, слепочных трансферов, каркасов мостовидных протезов и т.д. к соответствующим имплантатам, и аналогам, а так же для проверки положения и глубины остеотомического отверстия в процессе подготовки ложа под имплантат. Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм могут использоваться как временно, в процессе клинических этапов изготовления пациенту ортопедической конструкции, так и в зуботехнической лаборатории в процессе изготовления каркаса ортопедической конструкции.

- Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм	Артикул	31150
	Тип соединения	Внешнее шестигранное
	Платформа	Широкая (WP)
	Длина	20,00 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	3,42 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M2,5x0,45
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)
		
В комплект поставки изделия входит: - направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.29. Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl).

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl) представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl) используются для временной фиксации окклюзионных валиков, слепочных трансферов, каркасов мостовидных протезов и т.д. к соответствующим имплантатам, и аналогам, а так же для проверки положения и глубины остеотомического отверстия в процессе подготовки ложа под имплантат. Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl) могут использоваться как временно, в процессе клинических этапов изготовления пациенту ортопедической конструкции, так и в зуботехнической лаборатории в процессе изготовления каркаса ортопедической конструкции.

- Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, длина 20 мм	Артикул	31151
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Длина	20,20 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	3,42 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M2,5x0,45
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Технически чистый титан класса 1 анодирование TiO ₂
- Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level	Артикул	31152
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP), Широкая (WP), 6.0
	Длина	23,20 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,50 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм



NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 20 мм 	Резьба	M2,0x0,4
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)

- Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 30 мм 	Артикул	31153
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP), Широкая (WP), 6.0
	Длина	33,20 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,50 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M2,0x0,4
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)

В комплект поставки изделия входит:

- направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl)– 1 шт.;
- эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;

6.2.30. Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм используются для временной фиксации окклюзионных валиков, слепочных трансферов, каркасов мостовидных протезов и т.д. к соответствующим имплантатам, и аналогам, а так же для проверки положения и глубины остеотомического отверстия в процессе подготовки ложа под имплантат. Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм могут использоваться как временно, в процессе клинических этапов изготовления пациенту ортопедической конструкции, так и в зуботехнической лаборатории в процессе изготовления каркаса ортопедической конструкции.

- Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм	Артикул	37898
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Длина	20,20 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,25 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M1,6x0,35
	Масса	2,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)
		
В комплект поставки изделия входит: - направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.31. Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex используются для временной фиксации окклюзионных валиков, слепочных трансферов, каркасов мостовидных протезов и т.д. к соответствующим имплантатам, и аналогам, а так же для проверки положения и глубины остеотомического отверстия в процессе подготовки ложа под имплантат. Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex могут использоваться как временно, в процессе клинических этапов изготовления пациенту ортопедической конструкции, так и в зуботехнической лаборатории в процессе изготовления каркаса ортопедической конструкции.

- Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 20 мм 	Артикул	37899
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP), Широкая (WP)
	Длина	20,20 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,55 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M2,0x0,4
	Масса	2,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)
- Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 30 мм	Артикул	37900
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP), Широкая (WP)
	Длина	30,20 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	2,55 мм ± 0,02 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M2,0x0,4
	Масса	2,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не более 750 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1,4305)

		
В комплект поставки изделия входит: - направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.32. Направляющий пин, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм представляют собой винты, имеющие головку с плоской внешней поверхностью, шлиц типа Polydrive, предназначенные для фиксации конструкций с уровня имплантатов.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм используются для временной фиксации окклюзионных валиков, слепочных трансферов, каркасов мостовидных протезов и т.д. к соответствующим имплантатам, и аналогам, а так же для проверки положения и глубины остеотомического отверстия в процессе подготовки ложа под имплантат. Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм могут использоваться как временно, в процессе клинических этапов изготовления пациенту ортопедической конструкции, так и в зуботехнической лаборатории в процессе изготовления каркаса ортопедической конструкции.

- Направляющий пин, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм	Артикул	36792
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	3.0
	Длина	20,20 мм ± 0,2 мм
	Диаметр головки	1,82 мм ± 0,03 мм
	Вращающий момент	Не более 10 Нсм
	Резьба	M1,4x0,3
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
		
В комплект поставки изделия входит: - направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.33. Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC).

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC) представляют собой полые цилиндры, имеющие наружный диаметр, соответствующий внутренним размерам направленных втулок (NP, RP), и вставляются в эти направленные втулки, которые заделаны в хирургический шаблон. Затем дубликат имплантата из стандартного ассортимента, навинчивается на штифт, который проходит через цилиндр.

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC) предназначены для упрощения установки имплантатов с высокой степенью прогнозируемости и содействия более оптимальной реставрации при помощи размещения этих имплантатов как в нижней, так и в верхней челюсти.

Концепция направленной хирургии показана к применению для лечения челюстей с полной или частичной адентией (включая отсутствие одного зуба у пациента) путем установки зубных имплантатов, при наличии показаний - в сочетании с немедленной функциональной нагрузкой с целью восстановления эстетики и функций (например, жевательной и речевой).

Поскольку предусмотрена четко заданная посадка цилиндра в направленной втулке, головка дубликата имплантата размещается в том же положении относительно хирургического шаблона, в котором имплантат будет установлен в костную ткань пациента. Это позволяет отлить гипсовую модель челюсти по нижней поверхности хирургического шаблона, соответствующей поверхности мягкой ткани пациента, вместе с установленными дубликатами имплантатов в позициях, соответствующих предварительно заданным местам установки имплантатов.

В рамках смоделированного рабочего процесса цилиндр вместе с направленной втулкой подсоединяется к имплантатам, установленным в отлитую модель. При этом направленные втулки размещаются в надлежащем положении для отливки в лабораторный хирургический шаблон.

Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам поставляется в сборе.

- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP, диаметр 3.5	Артикул	37172
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота	9,20 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	3,54 мм ± 0,025 мм
	Диаметр головки	4,09 мм (⁺⁰ _{-0,03} мм)
	Диаметр внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	2,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Включая пин	
	Артикул	74322
	Длина	17,80 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	5,10 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм

	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP 	Артикул	38071
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота	9,20 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	3,54 мм ± 0,025 мм
	Диаметр головки	4,09 мм ($^{+0}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	1,66 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	2,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Включая пин	
	Артикул	77799
	Длина	17,80 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	5,10 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,6x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 4.3	Артикул	37173
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	9,20 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	3,92±0,025 мм
	Диаметр головки	5 мм ($^{+0}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	3,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Включая пин	
	Артикул	74323
	Длина	17,80 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	6,50 мм ± 0,05 мм

	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,40
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 5.0 	Артикул	37174
	Тип соединения	Внутреннее коническое
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	9,20 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	3,92 мм ± 0,025 мм
	Диаметр головки	6,20 мм ($^{+0}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	2,06 мм ± 0,025 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
	Включая пин	
	Артикул	74324
	Длина	17,80 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	7,50 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,40
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI
В комплект поставки изделия входит: - цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC) – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.34. Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl).

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl) представляют собой полые цилиндры, имеющие наружный диаметр, соответствующий внутренним размерам направленных втулок (NP, RP, WP, 6.0), и вставляются в эти направленные втулки, которые заделаны в хирургический шаблон. Затем дубликат имплантата из стандартного ассортимента, навинчивается на штифт, который проходит через цилиндр.

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl) предназначены для упрощения установки имплантатов с высокой степенью прогнозируемости и содействия более оптимальной реставрации при помощи размещения этих имплантатов как в нижней, так и в верхней челюсти.

Концепция направленной хирургии показана к применению для лечения челюстей с полной или частичной адентией (включая отсутствие одного зуба у пациента) путем установки зубных имплантатов, при наличии показаний - в сочетании с немедленной функциональной нагрузкой с целью восстановления эстетики и функций (например, жевательной и речевой).

Поскольку предусмотрена четко заданная посадка цилиндра в направленной втулке, головка дубликата имплантата размещается в том же положении относительно хирургического шаблона, в котором имплантат будет установлен в костную ткань пациента. Это позволяет отлить гипсовую модель челюсти по нижней поверхности хирургического шаблона, соответствующей поверхности мягкой ткани пациента, вместе с установленными дубликатами имплантатов в позициях, соответствующих предварительно заданным местам установки имплантатов.

В рамках смоделированного рабочего процесса цилиндр вместе с направленной втулкой подсоединяется к имплантатам, установленным в отлитую модель. При этом направленные втулки размещаются в надлежащем положении для отливки в лабораторный хирургический шаблон.

Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам поставляется в сборе.

- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP	Артикул	32769
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота	9,21 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	4,00 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	4,09 мм (⁺⁰ _{-0,03} мм)
	Диаметр внутренний 1	1,85 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	2,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO ₂
	Включая пин	
	Артикул	14631
	Длина	18,20 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	5,10 мм ± 0,05 мм

	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP 	Артикул	32771
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	9,35 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	4,50 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	5,00 мм ($^{+0}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	2,05 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	2,85 мм ± 0,05 мм
	Масса	3,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая пин	
	Артикул	14633
	Длина	19,20 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	6,50 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M1,8x0,35
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP	Артикул	32775
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Широкая (WP)
	Высота	9,34 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	5,60 мм ± 0,1 мм
	Диаметр головки	6,20 мм ($^{+0}_{-0,03}$ мм)
	Диаметр внутренний 1	2,10 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2

	Включая пин	
	Артикул	14635
	Длина	19,20 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	7,50 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
- Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0 	Артикул	32778
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	6.0
	Высота	9,34 мм ± 0,15 мм
	Диаметр платформы	5,60 мм (⁺⁰ _{-0,1} мм)
	Диаметр головки	6,20 мм (⁺⁰ _{-0,03} мм)
	Диаметр внутренний 1	2,10 мм ± 0,05 мм
	Диаметр внутренний 2	2,65 мм ± 0,05 мм
	Масса	4,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
	Включая пин	
	Артикул	15310
	Длина	19,20 мм ± 0,7 мм
	Диаметр головки	7,50 мм ± 0,05 мм
	Вращающий момент	Не более 35 Нсм
	Резьба	M2,0x0,4
	Предел прочности	Не менее 860 МПа
	Материал	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V ELI, анодирование TiO2
В комплект поставки изделия входит: - цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl) – 1 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

6.2.35. Защитные аналоги Protection Analog NobelReplace® (NobRpl).

Защитные аналоги Protection Analog NobelReplace® (NobRpl) представляют собой полые цилиндры, используемые в процессе сошлифовывания или при полировке абатментов, в клинике или лаборатории для защиты интерфейса абатмента ортопедической конструкции.

Защитные аналоги Protection Analog NobelReplace® (NobRpl) предназначены для использования на гипсовой модели в качестве аналога абатмента в процессе работы в зуботехнической лаборатории.

- Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, 5 шт. в упак. 	Артикул	29119
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Узкая (NP)
	Высота	14,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр платформы	5,21 мм ± 0,127 мм
	Диаметр основания	3,51 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр головки	3,43 мм ($+0,13$ -0 мм)
	Резьба внутренняя	M1,80x0,35
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 448 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 440FSe (S 44023)
- Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, 5 шт. в упак. 	Артикул	29120
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Стандартная (RP)
	Высота	14,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр платформы	5,21 мм ± 0,127 мм
	Диаметр основания	4,27 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр головки	3,43 мм ($+0,13$ -0 мм)
	Резьба внутренняя	M2,00x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 448 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 440FSe (S 44023)
- Защитный аналог Protection	Артикул	29121
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	Широкая (WP)

Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, 5 шт. в упак. 	Высота	14,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр платформы	4,98 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр основания	4,98 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр головки	3,43 мм ($+0,13$ -0 мм)
	Резьба внутренняя	M2,00x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 448 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 440FSe (S 44023)
- Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, 5 шт. в упак. 	Артикул	30043
	Тип соединения	Внутреннее трехканальное
	Платформа	6.0
	Высота	14,00 мм ± 0,25 мм
	Диаметр платформы	5,97 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр основания	5,97 мм ($+0,05$ -0 мм)
	Диаметр головки	3,43 мм ($+0,13$ -0 мм)
	Резьба внутренняя	M2,00x0,40
	Масса	1,0 г ± 0,1 г
	Предел прочности	Не менее 448 МПа
	Материал	Нержавеющая сталь AISI 440FSe (S 44023)
В комплект поставки изделия входит: - защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), 5 шт. в упак. – 5 шт.; - эксплуатационная документация (вкладывает уполномоченный представитель при поставке потребителю) - 1 шт.;		

7 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ КОМБИНАЦИИ

Тип соединения Платформа	Совместимый компонент Внутреннее коническое Conical Connection	Совместимый компонент Внешнее шестигранное External Hex	Совместимый компонент Внутреннее трехканальное Tri- channel
NP	- Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, в комплекте с фиксирующим винтом; - Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; - Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; - Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом; - Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом; - Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем; - Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем; - Колпачок выгораемый для	- Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; - Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; - Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом; - Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; - Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; - Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 1.5 мм; - Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 2.5 мм; - Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем; - Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим	- Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; - Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; - Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP - Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, диаметр 3.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; - Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, диаметр 4.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; - Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP - Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP - Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, длина 20 мм - Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip

	основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP 9. Цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical 10. Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 11. Трансферный пин с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 12. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм 13. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP, диаметр 3.5 – не более 500 шт.; 14. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP;	винтом и держателем; 10. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP 11. Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом 12. Трансфер, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом 13. Трансфер для открытой ложки Onl Impression Coping Open Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 14. Трансфер для открытой ложки Onl Impression Coping Open Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 15. Трансфер для закрытой ложки Onl Impression Coping Closed Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом 16. Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment 17. Аналог основания Onl Base Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом; 18. Аналог Onl IOS Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом; 19. Лабораторный винт ортопедический Onl Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP 20. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм	NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP; 10. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, 5 шт. в упак.;
RP	1. Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, в комплекте с фиксирующим винтом; 2. Абатмент универсальный	1. Абатмент эстетический Onl Esthetic Abutment Titanium, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом; 2. Абатмент универсальный	1. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом ;

без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; 3. Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; 4. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом; 5. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом; 6. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем; 7. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем; 8. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP 9. Цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical 10. Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 11. Трансферный пин с установленной резьбой	On1 Universal Abutment, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; 3. Абатмент универсальный On1 Universal Abutment, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выжигаемым колпачком; 4. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; 5. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом – не более 500 шт.; 6. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 1.5 мм; 7. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 2.5 мм; 8. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер RP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем; 9. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер RP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем; 10. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP 11. Колпачок золотой/пластиковый PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом 12. Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом 13. Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping	2. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; 3. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP 4. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, диаметр 4.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 5. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, диаметр 5.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 6. Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP 7. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп 8. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 20 мм 9. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 30 мм 10. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP; 11. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, 5 шт. в упак;
---	---	--

	Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 12. Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упаковке 13. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 20 мм 14. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 30 мм 15. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 4.3; 16. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 5.0;	Open Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 14. Трансфер без захвата для открытой ложки OnI Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 15. Трансфер для закрытой ложки OnI Impression Coping Closed Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом 16. Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment 17. Аналог основания OnI Base Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом; 18. Аналог OnI IOS Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом; 19. Лабораторный винт ортопедический OnI Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP 20. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 20 мм 21. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 30 мм	
WP	1. Абатмент универсальный без захвата OnI Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; 2. Абатмент универсальный без захвата OnI Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; 3. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging	1. Абатмент эстетический OnI Esthetic Abutment Titanium, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом; 2. Абатмент универсальный OnI Universal Abutment, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком; 3. Абатмент универсальный OnI Universal Abutment, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;	1. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; 2. Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; 3. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер WP 4. Трансфер для открытой

Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом; 4. Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом; 5. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем; 6. Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем; 7. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер WP 8. Цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical 9. Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 10. Трансферный пин с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 11. Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упак 12. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 20 мм 13. Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP,	4. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом.; 5. Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом; 6. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 1.5 мм.; 7. Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 2.5 мм.; 8. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 4 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.; 9. Заживляющий колпачок On1 IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем – не более 500 шт.; 10. Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер WP 11. Колпачок золотой/пластиковый PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом 12. Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом 13. Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring 14. Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер RP, в комплекте с винтом и	ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.; 5. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, диаметр 5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 6. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп 7. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 20 мм 8. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 30 мм 9. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP.; 10. Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, 5 шт. в упак.;
--	--	---

	длина 30 мм	кольцом O-ring 15. Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом 16. Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment; 17. Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом; 18. Аналог On1 IOS Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом; 19. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP; 20. Лабораторный винт ортопедический On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP 21. Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм;	
6.0	1. Цилиндр золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical 2. Трансферный пин с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25	1. Колпачок золотой/пластиковый PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом 2. Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом 3. Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment	1. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 2. Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, диаметр 7 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 3. Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп 4. Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0; 5. Защитный аналог Protection Analog

			NobelReplace® (NobRpl). типоразмер 6.0, 5 шт. в упак.;
3.0	1. Лабораторный винт, уровень имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 2. Направляющий пин, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм		
HL/RPL		1. Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 4.3 RPL, в комплекте с фиксирующим винтом; 2. Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом; 3. Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 5.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом; 4. Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом; 5. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.25HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 6. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.5RPL, диаметр 3.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 7. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 4.3RPL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 8. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex	

		Open Tray, типоразмер 5.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 9. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 6.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 10. Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.8/4.5 HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring; 11. Трансфер Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment;	
--	--	---	--

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями могут пользоваться только стоматологи и врачи, которые знакомы со стоматологической хирургией, в том числе с методикой диагностики и предоперационного импланирования и в соответствии с показаниями к её применению и общими правилами стоматологической/хирургической процедуры, а также при соблюдении норм охраны труда и правил техники безопасности.

Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, и привести, например, к потере или разлому абатментов, протезных компонентов, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.

Перед началом каждой операции, пожалуйста, убедитесь в том, что все необходимые компоненты, инструменты и вспомогательные материалы в полном комплекте находятся в рабочем состоянии и имеются в достаточном количестве. Изделия для интраорального использования должны быть надёжно изолированы в целях предотвращения аспирации и проглатывания. Поэтому мы рекомендуем посоветоваться по поводу использования данных изделий с опытным специалистом. И если возникает хотя бы малейшее сомнение относительно показания или метода использования, категорически запрещается пользоваться до тех пор, пока не будут выяснены все возможные нюансы.

Планирование терапии

Для достижения хороших результатов в стоматологической имплантологии группа врачей, которые проводят лечение, должна действовать слаженно и сообща на всех этапах

проведения терапии. Пациент, ортопед-стоматолог и хирург-стоматолог, а также зуботехническая лаборатория должны понимать и согласовать план лечения. В плане лечения должны быть определены конструкция, количество и положение имплантатов.

Группа врачей, проводящих лечение

Группа врачей, которая принимает участие в хирургическом вмешательстве, должна подготовить следующее:

Защитная одежда

Обязательно надеть стерильные медицинские халаты и шапочки для воспрепятствования проникновению кожных микроорганизмов в операционное поле и для защиты операционной бригады.

Защита носовой и ротовой полостей

Необходимо использовать однослойную или многослойную тканевую повязку.

Защита глаз

Во время проведения хирургической процедуры рекомендует надеть пластиковые очки.

Защита кожи

Необходимо надеть стерильные одноразовые перчатки.

Дезинфекция рук перед проведением операции

В соответствии с планом гигиенических мероприятий необходимо продезинфицировать руки и предплечья спиртосодержащими препаратами.

Очищение рта пациента

Укрывание пленкой

Необходимо использовать стерильную пленку с достаточно широким отверстием для хирургической зоны (рот, нос, глаза).

Очистите рот марлевым тампоном, смоченным в соответствующую жидкость, или прополощите рот дезинфицирующим средством.

Инструменты

Необходимо убедиться, что все инструменты простерилизованы.



Всегда используйте стерильные инструменты для взятия или передачи инструментария. Необходимо убедиться в наличии всех дополнительных стерильных запасных инструментов, а также стерильных имплантатов.

9 СТЕРИЛИЗАЦИЯ МИ

9.1. Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте.

9.1.1. Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, в комплекте с фиксирующим винтом;

Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, в комплекте с фиксирующим винтом

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC) в комплекте с фиксирующим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделия необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.1.2. Абатменты с захватами золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 4.3 RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;

Абатмент с захватом золотой/пластиковый Direct Abutment Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты с захватами золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic в комплекте с фиксирующим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137

°C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделия необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.1.3. Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, в комплекте с фиксирующим винтом.

Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 5.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;

Абатмент без захвата золотой/пластиковый Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic, типоразмер 6.0 HL/RPL, в комплекте с фиксирующим винтом;

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic в комплекте с фиксирующим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделия необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.1.4. Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком.

Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный без захвата Onl Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный без захвата Onl Universal Abutment Non-Engaging, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты универсальные без захвата Onl Universal Abutment Non-Engaging, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.1.5. Абатменты универсальные Onl Universal Abutment, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком.

Абатмент универсальный Onl Universal Abutment, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный Onl Universal Abutment, типоразмер NP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный Onl Universal Abutment, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный Onl Universal Abutment, типоразмер RP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выжигаемым колпачком;

Абатмент универсальный Onl Universal Abutment, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком;

Абатмент универсальный Onl Universal Abutment, типоразмер WP, длина 1.25 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не

используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты универсальные On1 Universal Abutment, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.1.6. Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium, в комплекте с ортопедическим винтом

Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер NP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом;

Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер RP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом;

Абатмент эстетический On1 Esthetic Abutment Titanium, типоразмер WP, длина 0.3 мм, в комплекте с ортопедическим винтом

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium, в комплекте с ортопедическим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.2. Принадлежности

9.2.1. Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC).

Абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом;

абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом;
абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом;
абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом;
абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 1.5 мм в комплекте с фиксирующим винтом;
абатмент временный с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 3 мм в комплекте с фиксирующим винтом
поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Абатменты временные с захватом Temporary Snappy (Snap) Abutment Engaging Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.2.2. Основания Universal Base External Hex Connection, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом.

Основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;
основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер NP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;
основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;
основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер RP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;
основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;
основание Universal Base External Hex Connection, типоразмер WP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом
поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию

тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Основания Universal Base External Hex Connection в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.2.3. Основания Universal Base Tri-Channel Connection, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом.

Основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;

основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер NP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;

основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;

основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер RP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;

основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длина 1.5 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;

основание Universal Base Tri-Channel Connection, типоразмер WP, длина 3 мм, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом;

поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Основания Universal Base Tri-Channel Connection в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие

необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.2.4. Основания On1 Base Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом и держателем.

Основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем;

основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер NP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем;

основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем;

основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер RP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем;

основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 1.75 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем;

основание On1 Base Conical Connection (CC), типоразмер WP, длина 2.5 мм, в комплекте с фиксирующим винтом и держателем

поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Не использовать после указанной даты истечения срока годности. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Стерилизацию проводят с помощью гамма-излучения. Необходимо всегда проверять упаковку изделия перед использованием, чтобы выявить любые повреждения целостности. Если любой компонент утратил свою стерильность, в частности, если была нарушена целостность упаковки или какой-либо компонент контактировал с нестерильной поверхностью, которая не входит в процедуру, его нельзя повторно стерилизовать или использовать.

Параметры стерилизации с применением радиации:

- стерилизация проводится в первичной упаковке;
- метод проведения стерилизации медицинского изделия – с применением радиации;
- наименование средства для стерилизационного процесса – изотоп Кобальт-60;
- условия обработки 25,0 кГр (минимальная доза), 40,0 кГр (максимальная доза);
- гарантированный уровень стерильности 10^{-6} согласно ISO 11137-1:2013 (один зараженный образец на миллион).

9.2.5. Заживляющие колпачки On1 Healing Cap.

Заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 1.5 мм;

заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер NP, длина 2.5 мм;

заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 1.5 мм;

заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер RP, длина 2.5 мм;

заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 1.5 мм;

заживляющий колпачок On1 Healing Cap, типоразмер WP, длина 2.5 мм

поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Не использовать после указанной даты истечения срока годности. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Стерилизацию проводят с помощью гамма-излучения. Необходимо всегда проверять упаковку изделия перед использованием, чтобы выявить любые повреждения целостности. Если любой компонент утратил свою стерильность, в частности, если была нарушена целостность упаковки или какой-либо компонент контактировал с нестерильной поверхностью, которая не входит в процедуру, его нельзя повторно стерилизовать или использовать.

Параметры стерилизации с применением радиации:

- стерилизация проводится в первичной упаковке;
- метод проведения стерилизации медицинского изделия – с применением радиации;
- наименование средства для стерилизационного процесса – изотоп Кобальт-60;
- условия обработки 25,0 кГр (минимальная доза), 40,0 кГр (максимальная доза);
- гарантированный уровень стерильности 10^{-6} согласно ISO 11137-1:2013 (один зараженный образец на миллион).

9.2.6. Заживляющие колпачки Onl IOS Healing Cap, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем.

Заживляющий колпачок Onl IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем;

заживляющий колпачок Onl IOS Healing Cap, типоразмер NP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем;

заживляющий колпачок Onl IOS Healing Cap, типоразмер RP, длина 4.5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем;

заживляющий колпачок Onl IOS Healing Cap, типоразмер RP, длина 6 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем;

заживляющий колпачок Onl IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 4 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем;

заживляющий колпачок Onl IOS Healing Cap, типоразмер WP, длина 5 мм, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем

поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования. Не использовать после указанной даты истечения срока годности. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Стерилизацию проводят с помощью гамма-излучения. Необходимо всегда проверять упаковку изделия перед использованием, чтобы выявить любые повреждения целостности. Если любой компонент утратил свою стерильность, в частности, если была нарушена целостность упаковки или какой-либо компонент контактировал с нестерильной поверхностью, которая не входит в процедуру, его нельзя повторно стерилизовать или использовать.

Параметры стерилизации с применением радиации:

- стерилизация проводится в первичной упаковке;
- метод проведения стерилизации медицинского изделия – с применением радиации;
- наименование средства для стерилизационного процесса – изотоп Кобальт-60;
- условия обработки 25,0 кГр (минимальная доза), 40,0 кГр (максимальная доза);

– гарантированный уровень стерильности 10^{-6} согласно ISO 11137-1:2013 (один зараженный образец на миллион).

9.2.7. Колпачки выгораемые для основания Universal Base Burn-out Coping.

Колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер NP/RP;

колпачок выгораемый для основания Universal Base Burn-out Coping, типоразмер WP поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Колпачки выгораемые для основания Universal Base Burn-out Coping необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.8. Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом.

Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic в комплекте с винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.2.9. Цилиндры золотой с уступом конический Gold Cylinder with Chamfer Conical.

Цилиндры золотые с коническим закруглением Gold Cylinder with Chamfer Conical поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Цилиндры золотые с коническим закруглением Gold Cylinder with Chamfer Conical необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.10. Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер NP, диаметр 3.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер NP, диаметр 4.5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер RP, диаметр 4.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер RP, диаметр 5.3 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер WP, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер WP, диаметр 5 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер 6.0, диаметр 6 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace (NobRpl)®, типоразмер 6.0, диаметр 7 мм, в комплекте с винтом и кольцом O-ring

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонента с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl) в комплекте с винтом и кольцом O-ring необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте трансфер и винт с кольцом O-ring в отдельные пакеты и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.11. Трансферы для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом.

Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом поставляются нестерильными и предназначены для одноразового применения.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Трансфер для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Проверьте и упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром, используя гравитационный цикл (насыщенный пар) или цикл предварительного вакуумирования (принудительная откачка воздуха) с указанными ниже параметрами: при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F), в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Этот продукт предназначен для одноразового использования и не предназначен для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и/или биологических свойств.

9.2.12. Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.25HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.5RPL, диаметр 3.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 4.3RPL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 5.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 6.0 HL/RPL, диаметр 6, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, типоразмер 3.8/4.5 HL, диаметр 4.5, в комплекте с винтом и кольцом O-ring

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения.

Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте трансфер и винт с кольцом O-ring в отдельные пакеты и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.13. Трансферы, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом.

Трансферы, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP в комплекте с винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить

9.2.14. Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge в комплекте с винтом и кольцом O-ring необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте трансфер и винт с кольцом O-ring в отдельные пакеты и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.15. Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray в комплекте с винтом и кольцом O-ring необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте трансфер и винт с кольцом O-ring в отдельные пакеты и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.16. Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, в комплекте с винтом и кольцом O-ring.

Трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер NP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер RP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring;

трансфер без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, типоразмер WP, в комплекте с винтом и кольцом O-ring

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или

передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging в комплекте с винтом и кольцом O-ring необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте трансфер и винт с кольцом O-ring в отдельные пакеты и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.17. Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, в комплекте с винтом.

Трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер NP, в комплекте с винтом;

трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер RP, в комплекте с винтом;

трансфер для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, типоразмер WP, в комплекте с винтом

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray в комплекте с винтом необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте каждый компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.18. Трансферы Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment.

Трансферы Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась

ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферы Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.19. Трансферные пины с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25.

Трансферные пины с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Трансферные пины с установленной резьбой Thread Timed Transfer Pin, Non-Hex, диаметр 3.25 необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.20. Аналоги основания On1 Base Replica, в комплекте с клиническим винтом.

Аналог основания On1 Base Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом;

аналог основания On1 Base Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом;

аналог основания On1 Base Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.21. Аналоги On1 IOS Replica, в комплекте с клиническим винтом.

Аналог On1 IOS Replica, типоразмер NP, в комплекте с клиническим винтом;

аналог On1 IOS Replica, типоразмер RP, в комплекте с клиническим винтом;

аналог On1 IOS Replica, типоразмер WP, в комплекте с клиническим винтом

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в

зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.22. Лабораторные винты угловые Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl).

Лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP;

лабораторный винт угловой Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.23. Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl).

Лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP;

лабораторный винт, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP/6.0, 5 шт. в уп.

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.24. Лабораторные винты, уровень имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0.

Лабораторные винты, уровень имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0 поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.25. Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP.

Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.26. Лабораторный винт Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP, 5 шт в упак.

Лабораторные винты Lab Screw Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP Ext Hex RP, 5 шт в упак. поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.27. Лабораторные винты ортопедические On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP.

Лабораторные винты ортопедические On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

9.2.28. Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.29. Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl).

Направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, длина 20 мм;

направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 20 мм;

направляющий пин, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP/WP, длина 30 мм

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров.

Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции в соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl) необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.30. Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции в соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.31. Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex.

Направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 20 мм;

направляющий пин, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex, типоразмер RP, длина 30 мм

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции в соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.32. Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции в соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.33. Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC).

Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP, диаметр 3.5;

цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер NP;

цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 4.3;

цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC), типоразмер RP, диаметр 5.0

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC) необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.34. Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl).

Цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP;

цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP;

цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP;

цилиндр с пином для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения. Перед применением и повторным применением следует выполнить очистку, дезинфекцию и стерилизацию компонентов с применением рекомендованных параметров. Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию тканей или передаче инфекционного заболевания. Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Используйте ручной или механический способ очистки и дезинфекции с соответствии с инструкцией изложенной ниже.

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl) необходимо простерилизовать перед использованием. Упакуйте один компонент в пакет и выполните стерилизацию паром при температуре от 132 °C до 135 °C (от 270 °F до 275 °F), но не более 137 °C (279 °F) в течение 3 минут. Просушите в камере в течение 10 минут. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

9.2.35. Защитные аналоги Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), 5 шт. в упак.

Защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер NP, 5 шт. в упак.;

защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер RP, 5 шт. в упак.;

защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер WP, 5 шт. в упак.;

защитный аналог Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), типоразмер 6.0, 5 шт. в упак.

поставляются нестерильными и предназначены для многократного применения в зуботехнической лаборатории. Так как изделия не предназначены для использования в полости рта пациента, специальные указания/методы очистки отсутствуют.

Параметры стерилизации с применением радиации:

- стерилизация проводится в первичной упаковке;
- метод проведения стерилизации медицинского изделия – с применением радиации;
- наименование средства для стерилизационного процесса – изотоп Кобальт-60;
- условия обработки 25,0 кГр (минимальная доза), 40,0 кГр (максимальная доза);
- гарантированный уровень стерильности 10^{-6} согласно ISO 11137-1:2013 (один зараженный образец на миллион)

Параметры стерилизации паром.

Упаковка

Поместите медицинское изделие в пакеты для стерилизации.

Стерилизация

Стерилизуйте компоненты набора с помощью фракционного предварительного вакуумирования.

Параметры цикла предварительного вакуумирования:

- 3 этапа предварительного вакуумирования при 60 мбар (минимум);

Новый цикл:

- Нагрейте до минимальной температуры стерилизации 132 °C;
- Максимальное давление стерилизации 2 Бар;
- Минимальное время выдержки – 3 минуты;
- Время сушки – не менее 10 минут.

Хранение

Изделие должно находиться в соответствующем лотке. Использовать изделие необходимо сразу же после завершения процесса стерилизации, не хранить.

Ручная очистка, дезинфекция и сушка

1 Удалите загрязнения в теплой воде и погрузите изделия в раствор моющего средства

Удалите остатки тканей или костной стружки путем погружения использованных инструментов в теплую воду (<40°C/104°F). Не применяйте вяжущие вещества или горячую воду (>40°C/104°F), так как это может повлиять на результаты последующей очистки. Инструменты следует держать во влажной среде до начала следующего этапа.

Погрузите инструменты в раствор ферментного чистящего средства (например, в раствор ферментного моющего средства с уровнем pH 7-10), приготовленном с использованием теплой водопроводной воды. Соблюдайте инструкции производителя моющего средства.

2 Потрите изделия с помощью мягкой нейлоновой щетки

Потрите внешнюю и, если применимо, внутреннюю поверхность инструментов мягкой нейлоновой щеткой под струей холодной водопроводной воды до удаления всех видимых остатков и загрязнений. Обратите особое внимание на участки изделия, которые могут затруднять его очистку.

3 Промойте многоразовые изделия с внутренними каналами/просветом раствором моющего средства

4 Погрузите в ультразвуковую ванну

Приготовьте ультразвуковую ванну с раствором моющего средства с концентрацией и температурой, соответствующими инструкциям производителя моющего средства.

Полностью погрузите устройство и включите ванну на время, соответствующее минимальному времени, указанному в инструкциях производителя моющего средства.

Примечания:

- Избегайте прямого контакта между инструментами с острыми режущими краями во время ультразвуковой обработки, чтобы не повредить изделия или не снизить их срок службы (например, сверел).

5 Промойте очищенной или стерильной водой

Промойте в течение минимум 1 минуты свежеприготовленной очищенной водой/высокоочищенной водой или стерильной водой для удаления остатков чистящего раствора.

6 Промойте внутренние каналы/просвет изделий очищенной или стерильной водой

Промойте внутренние каналы/просвет изделий с помощью 20 мл свежеприготовленной очищенной воды/высокоочищенной воды или стерильной воды.

7 При необходимости повторите этапы очистки

Если после очистки на изделии останутся твердые загрязнения и/или частицы тканей, повторите все этапы процесса очистки с 1 по 6.

8 Погрузите в дезинфицирующий раствор.

Приготовьте ванну с дезинфицирующим раствором с концентрацией и температурой, в соответствии с инструкцией производителя моющего средства.

Убедитесь, что все просветы заполнены дезинфицирующим раствором, а все поверхности смачиваются им.

Погрузите изделие на время, соответствующее минимальному времени, указанному в инструкциях производителя моющего средства.

9 Промойте внутренние каналы/полости дезинфицирующим раствором.

Промойте внутренние каналы/просвет изделий минимум три раза с помощью 20 мл дезинфицирующего раствора.

10 Промойте очищенной или стерильной водой.

Тщательно промойте изделие в течение минимум 1 минуты свежеприготовленной очищенной водой/высокоочищенной водой или стерильной водой. Извлеките изделие и слейте промывочную воду. Повторите этот этап еще два раза, в общей сложности необходимо провести три промывания. Не использовать повторно воду. Для каждого промывания всегда используйте свежий объем воды.

11 Промойте внутренние каналы/просвет изделий очищенной или стерильной водой.

Промойте внутренние каналы/просвет изделий минимум три раза с помощью 20 мл свежеприготовленной очищенной воды/высокоочищенной воды или стерильной воды.

12 Высушите сжатым воздухом или салфетками.

Высушите медицинские изделия медицинским сжатым воздухом и чистыми безворсовыми одноразовыми салфетками.

13 При необходимости полностью повторите процедуру очистки и дезинфекции

Проведите визуальный осмотр и, при необходимости, полностью повторите процедуру очистки и дезинфекции.

Автоматическая чистка, дезинфекция и сушка (включая предварительную очистку)

1 Удалите загрязнения в теплой воде и погрузите изделия в раствор моющего средства

Удалите остатки тканей или костной стружки путем погружения использованных инструментов в теплую воду ($<40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$). Не применяйте вяжущие вещества или горячую воду ($>40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$), так как это может повлиять на результаты последующей очистки. Инструменты следует держать во влажной среде до начала следующего этапа.

В случае сильного загрязнения медицинских изделий, подлежащих процессу автоматической чистки, рекомендовано провести предварительную очистку в ультразвуковой ванне.

Погрузите инструменты в раствор ферментного чистящего средства (например, в раствор ферментного моющего средства с уровнем pH 7-10), приготовленном с использованием теплой водопроводной воды.

Время погружения должно быть не меньше времени, указанного в инструкции производителя моющего средства (температура не должна превышать $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).

2 Потрите изделия с помощью мягкой нейлоновой щетки

Потрите внешнюю и, если применимо, внутреннюю поверхность инструментов мягкой нейлоновой щеткой до удаления всех видимых остатков и загрязнений. Обратите особое внимание на участки изделия, которые могут затруднять его очистку.

3 Промойте многоразовые изделия с внутренними каналами/просветом раствором моющего средства

Промойте внутренние каналы/просвет изделий 20 мл чистящего раствора из мандрена (входит в состав хирургического набора, либо приобретается отдельно), установленного на шприц объемом 20 мл. Проверьте каналы/просвет изделий на наличие оставшихся загрязнений и/или частиц тканей.

4 Промойте водопроводной водой

Для удаления всех остатков чистящего раствора:

Промойте внешнюю поверхность холодной водопроводной водой.

Промойте просвет изделия холодной водопроводной водой с помощью шприца 20 мл с установленным мандреном.

5 Загрузите изделия в моечную/дезинфицирующую машину

После предварительной очистки поместите инструменты в лоток для инструментов или штатив для инструментов и загрузите их в моечную/дезинфицирующую машину.

Примечание: Перед проведением очистки и дезинфекции органайзеры наборов инструментов должны быть полностью разобраны. Рекомендовано извлечение втулок.

6 Запустите цикл очистки и дезинфекции

Соблюдайте инструкции производителей моечных машин.

7 Запустите цикл сушки

Высушите внешнюю поверхность инструментов с помощью цикла сушки моечной/дезинфицирующей машины.

8 При необходимости высушите сжатым воздухом или салфетками

При необходимости, можно провести дополнительную ручную сушку с помощью чистых безворсовых одноразовых салфеток. Полости для продувания, каналы или просветы дезинфицированных деталей можно высушить с помощью стерильного сжатого воздуха.

AB *при возникновении вопросов обратитесь к представителям компании NobelBiocare

10 ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями могут использоваться в государственных или частных стоматологических клиниках и только хирургами, прошедшими обучение и имеющими достаточный опыт работы в данной области. Основными потребителями медицинского изделия являются пациенты, которым требуется функциональная и эстетическая реабилитация с полным или частичным отсутствием зубов.

11 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) - ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.

Лабораторные испытания показали, что только

Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер NP, в комплекте с фиксирующим винтом;

Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), типоразмер RP, в комплекте с фиксирующим винтом

являются МР-совместимы. После установки данных компонентов безопасность при выполнении томографии пациента определяется следующими условиями:

- напряженность магнитного поля только 1,5 Тл и 3,0 Тл;
- максимальный пространственный градиент магнитного поля 4000 Гс/см (40 Тл/м);
- максимальная заявленная для системы МРТ удельная мощность поглощения излучения организмом человека (SAR) составляет 4 Вт/кг (контролируемый режим первого уровня).

Ожидается, что в указанных режимах температура абатментов без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом увеличится максимум на 4,1 °С через 15 минут после непрерывного сканирования.

В условиях неклинических испытаний артефакт изображения, вызванный компонентами, выходил за пределы компонента на 30 мм.

Перед сканированием необходимо снять съемные конструкции, а также часы, ювелирные украшения и т. д., если визуализация осуществляется МРТ-системой 3,0 Тл в режиме последовательности импульсов градиент-эхо.

Остальные изделия не проходили оценку на предмет безопасности и совместимости в среде магнитно-резонансной томографии. Испытания изделий на предмет нагрева, миграции или возникновения на снимках МРТ артефактов не проводились. Сведения о безопасности изделий в среде магнитно-резонансной томографии отсутствуют. МРТ пациента с установленным изделием может привести к травме.

12 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

При эксплуатации Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями устойчивы к воздействию температуры +32...+42°C и воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации. Изделие относится к климатическому исполнению У6 по ГОСТ Р 50444-92.

13 УПАКОВКА

Упаковка абатментов для дентальных имплантатов к комплекту изначально была разработана с целью поддержания и сохранения качества продукта после транспортировки и хранения, а также для защиты от влажности и соответствует ISO 11607.

Первичная упаковка находится в прямом контакте с продуктом (изделием) и состоит из полиэтилентерефталатового (ПЭТ) блистерного лотка с бумажной накладкой/этикеткой с запаиваемыми швами для медицинского оборудования. Вторичная упаковка представлена полиэтиленовым пакетом ПЭТ (Полиэтилен LDPE), на который наносится российская маркировка.

Изображение индивидуальной упаковки (блистер с двумя полостями)	Компонент	Материал	Тип контакта с изделием
	Блистер	ПЭТ	Непосредственный
	Накладка/ Этикетка	Медицинская бумага	Непосредственный
	Вторичная упаковка	Полиэтилен овый пакет ПЭТ (Полиэтилен LDPE)	Непрямой

Принадлежности

Упаковка принадлежностей для абатментов для дентальных имплантатов в комплекте изначально была разработана с целью поддержания и сохранения качества продукта после транспортировки и хранения, а также для защиты от влажности и соответствует ISO 11607.

Первичная упаковка находится в прямом контакте с продуктом (изделием) и состоит из блистера в бумажной пленке ПЭТ. Используются тара (оболочка) полиэтилентерефталатовый (ПЭТ) блистерный лоток с бумажной накладкой/этикеткой с запаиваемыми швами для медицинского оборудования. Размеры полости блистера могут быть разными в зависимости от размеров изделий, которые должны быть упакованы. Возможные варианты блистеров приведены ниже (с одной, двумя или пятью полостями). Вторичная упаковка представлена

полиэтиленовым пакетом ПЭТ (Полиэтилен LDPE), на который наносится российская маркировка.

Изображение индивидуальной упаковки (блистер с одной полостью)	Компонент	Материал	Тип контакта с изделием
	Блистер	ПЭТ	Непосредственный
	Накладка/ Этикетка	Медицинская бумага	Непосредственный
	Вторичная упаковка	Полиэтиленовый пакет ПЭТ (Полиэтилен LDPE)	Непрямой

Изображение индивидуальной упаковки (блистер с двумя полостями)	Компонент	Материал	Тип контакта с изделием
	Блистер	ПЭТ	Непосредственный
	Накладка/ Этикетка	Медицинская бумага	Непосредственный
	Вторичная упаковка	Полиэтиленовый пакет ПЭТ (Полиэтилен LDPE)	Непрямой

Изображение индивидуальной упаковки (блистер с пятью полостями)	Компонент	Материал	Тип контакта с изделием
	Блистер	ПЭТ	Непосредственный
	Накладка/ Этикетка	Медицинская бумага	Непосредственный
	Вторичная упаковка	Полиэтиленов ый пакет ПЭТ (Полиэтилен LDPE)	Непрямой

Изделия, упакованные в индивидуальную упаковку, укладываются в коробку групповой упаковки. Возможны две различные конфигурации транспортировки: горизонтальная транспортировка и вертикальная транспортировка.

Картонные коробки и вставки для транспортировки абатментов.


Картонная коробка групповой упаковки артикул	Описание	Артикул вставки (количество)	Максимально е количество упаковок изделий в одной коробке	Положение транспортиров ки упаковок изделий
19193	Картонная коробка 255x169x30 мм	74940 (1 вставка)	6	Горизонтальное
19194	Картонная коробка 255x169x53 мм	74940 (2 вставки)	12	Горизонтальное
19195	Картонная коробка 255x169x99 мм	74940 (4 вставки)	24	Горизонтальное
		79244 (1 вставка)	96	Вертикальное
79245	Картонная коробка 388x193x80 мм	79247 (1 вставка)	168	Вертикальное



1. Горизонтальная транспортировка:
Абатменты для зубных имплантатов в комплекте, с принадлежностями упакованы в горизонтальном положении. Для данной

конфигурации коробки всегда используется вставка 74940, к данному типу относятся три картонные коробки. Вставка 74940 действует как буферная зона для предотвращения прямых ударов по упаковке абатмента. Для самой маленькой картонной коробки 19193, содержащей шесть упаковок, используется одна вставка. Для средней картонной коробки 19194, содержащей 12 упаковок, используются две вставки. Для самой большой картонной коробки 19195, содержащей 24 упаковки, используются четыре вставки.


Картонная коробка 19193 с одной вставкой 74940

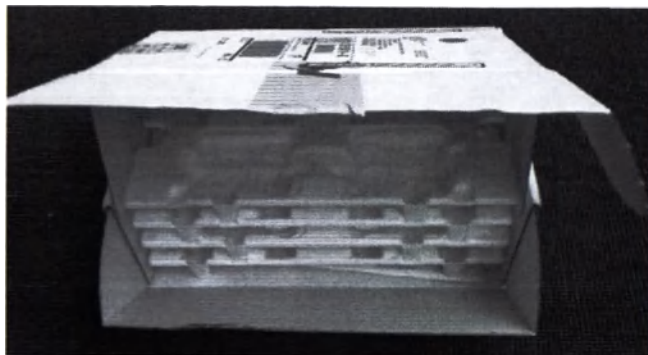

Картонная коробка 19195 с четырьмя вставками 74940

2. Вертикальная транспортировка:

Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями упакованы в вертикальном положении. Для данного вида транспортировки существуют две картонные коробки: 19195 и 79245. В этих коробках используются вставки с одинаковыми перегородками, но перегородок разное количество. Перегородки разделены таким образом, чтобы в каждое пространство устанавливалось по восемь упаковок абатментов. В картонной коробке 19195 максимальное количество коробок абатментов составляет 96, а в картонной коробке 79245, соответственно, 168. Коробки используются в основном для транспортировки абатментов и комбинационных упаковок.

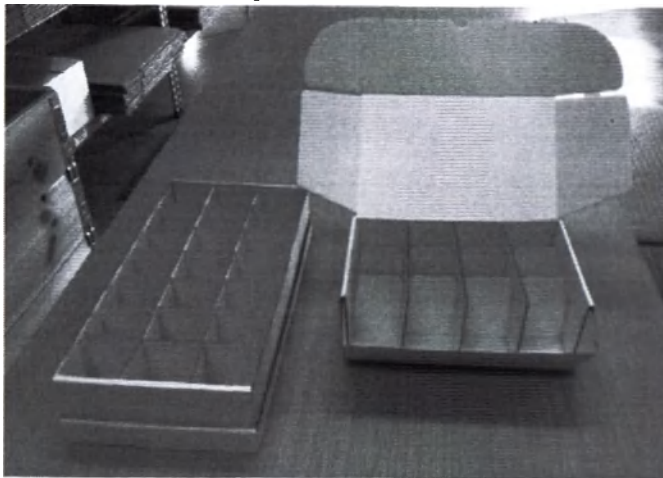

Слева: Коробка: 79245, крышка: 79246, вставка: 79247; справа: 19195, вставка: 79244.

Демонстрирует картонные коробки и соответствующие вставки, используемые в «Nobel Biocare AB» для транспортировки абатментов с центральных складов клиенту. Картонные коробки с синим цветом фона используются для горизонтальной транспортировки упаковки, а с красным – для вертикальной транспортировки.

Для картонной коробки 79245 используется картонная крышка 79246.

Крышка для картонной коробки 91495.

Артикул	Описание	Положение транспортировки упаковок имплантатов
79246	Крышка для картонной коробки 388x193x80	Вертикальное

Схема упаковки в транспортировочную упаковку размером 630 x 420 x 235 мм.

1	Заполненная промежуточная коробка размером (616 x 410 x 212 мм) запечатывается липкой лентой 50 мм.	
2	Транспортировочная коробка размером (630 x 420 x 235 мм) футеруется полиэтиленовой пленкой (для защиты от влаги).	
3	Промежуточная коробка помещается в транспортировочную коробку, футерованную внутри полиэтиленовой пленкой.	
4	Полиэтиленовая пленка заклеивается липкой лентой. Внутри транспортировочной коробки укладываются транспортировочные документы. Транспортировочная коробка запечатывается липкой лентой и затягивается 4 раза белыми пластиковыми шнурами. На транспортировочную упаковку клеится информация о доставке.	

Схема упаковки в транспортировочную упаковку размером 630x 420 x 470 мм.

1	Заполненная промежуточная коробка размером (616 x 410 x 212 мм) запечатывается липкой лентой 50 мм.	
2	Транспортировочная коробка размером (630x 420 x 470 мм) футеруется полиэтиленовой пленкой (для защиты от влаги)	
3	Две промежуточные коробки помещаются в транспортировочную коробку, футерованную внутри полиэтиленовой пленкой.	

4	Полиэтиленовая пленка заклеивается липкой лентой. Внутри транспортировочной коробки укладываются транспортировочные документы. Транспортировочная коробка запечатывается липкой лентой и затягивается 4 раза белыми пластиковыми шнурами. На транспортировочную упаковку клеится информация о доставке.	
---	---	---

Схема упаковки в транспортировочную упаковку размером 630 x 420 x 235 мм.

1	Заполненная промежуточная коробка размером (616 x 410 x 212 мм) запечатывается липкой лентой 50 мм.	
2	Транспортировочная коробка размером (630 x 420 x 235 мм) футеруется полиэтиленовой пленкой (для защиты от влаги).	
3	Промежуточная коробка помещается в транспортировочную коробку, футерованную внутри полиэтиленовой пленкой.	
4	Полиэтиленовая пленка заклеивается липкой лентой. Внутри транспортировочной коробки укладываются транспортировочные документы. Транспортировочная коробка запечатывается липкой лентой и затягивается 4 раза белыми пластиковыми шнурами. На транспортировочную упаковку клеится информация о доставке.	

Схема упаковки в транспортировочную упаковку размером 630x 420 x 470 мм.

1	Заполненная промежуточная коробка размером (616 x 410 x 212 мм) запечатывается липкой лентой 50 мм.	
2	Транспортировочная коробка размером (630x 420 x 470 мм) футеруется полиэтиленовой пленкой (для защиты от влаги)	

3	Две промежуточные коробки помещаются в транспортировочную коробку, футерованную внутри полиэтиленовой пленкой.	
4	Полиэтиленовая пленка заклеивается липкой лентой. Внутри транспортировочной коробки укладываются транспортировочные документы. Транспортировочная коробка запечатывается липкой лентой и затягивается 4 раза белыми пластиковыми шнурами. На транспортировочную упаковку клеится информация о доставке.	

14 МАРКИРОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Маркировка нестерильных медицинских изделий одноразового использования:
«Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями» включает в себя следующую информацию:

- Фирма, адрес и логотип производителя.
- Наименование медицинского изделия
- Номер артикула и номер лота
- Обратитесь к инструкции по применению
- Не использовать при повреждении упаковки
- Символ «Не стерильная»
- Дата изготовления
- Только для профессионального использования в стоматологии
- Система с цветовой кодировкой (только для платформ RP (Узкая), NP (Стандартная), WP (Широкая)) для точного и быстрого идентификация компонента: пурпурный - платформа NP (Узкая), желтый - платформа RP (Стандартная), голубой – платформа WP (Широкая)

Абатмент без захвата GoldAdapt Non-Engaging
Conical Connection (CC), типоразмер NP,
в комплекте с фиксирующим винтом

REF XXXXX

LOT XXXXX



Дата изготовления
ГГГГ-ММ-ДД



Запрет на повторное
применение



Не использовать
при повреждении
упаковки



См. инструкцию



Не стерильно

Rx Only



Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden

Регистрационное удостоверение "Абатменты для зубных
имплантатов в комплекте, с принадлежностями"
№XXXXX дата выдачи XXXXX

Уполномоченный представитель: ООО «Нобель Биокер Раша»
109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2
Тел. +7-495-974-7755

Сделано в XXXX

CE 0086

Абатмент универсальный без захвата
OnI Universal Abutment Non-Engaging,
типоразмер RP, длина 0.3 мм,
в комплекте с ортопедическим винтом и
выгораемым колпачком

REF XXXXX

LOT XXXXX



Дата изготовления
ГГГГ-ММ-ДД



Запрет на повторное
применение



Не использовать
при повреждении
упаковки



См. инструкцию



Не стерильно

Rx Only



Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden

Регистрационное удостоверение "Абатменты для зубных
имплантатов в комплекте, с принадлежностями"
№XXXXX дата выдачи XXXXX

Уполномоченный представитель: ООО «Нобель Биокер Раша»
109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2
Тел. +7-495-974-7755

Сделано в XXXX

CE 0086

Абатмент универсальный OnI Universal Abutment,
типоразмер WP, длина 1.25 мм,
в комплекте с ортопедическим винтом и
выгораемым колпачком

REF XXXXX

LOT XXXXX



Дата изготовления
ГГГГ-ММ-ДД



Запрет на повторное
применение



Не использовать
при повреждении
упаковки



См. инструкцию



Не стерильно

Rx Only



Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden

Регистрационное удостоверение "Абатменты для зубных
имплантатов в комплекте, с принадлежностями"
№XXXXX дата выдачи XXXXX

Уполномоченный представитель: ООО «Нобель Биокер Раша»
109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2
Тел. +7-495-974-7755

Сделано в XXXX

CE 0086

Абатмент без захвата золотой/пластиковый
Direct Abutment Non-Engaging Gold/Plastic,
типоразмер 6.0 HL/RPL,
в комплекте с фиксирующим винтом

REF XXXXX

LOT XXXXX



Дата изготовления
ГГГГ-ММ-ДД



Запрет на повторное
применение



Не использовать
при повреждении
упаковки



См. инструкцию



Не стерильно

Rx Only



Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden

Регистрационное удостоверение "Абатменты для зубных
имплантатов в комплекте, с принадлежностями"
№XXXXX дата выдачи XXXXX

Уполномоченный представитель: ООО «Нобель Биокер Раша»
109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2
Тел. +7-495-974-7755

Сделано в XXXX

CE 0086

В маркировке используются следующие символы:

LOT

Код партии


	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не стерильно
	Запрет на повторное применение
	Дата изготовления
	Изготовитель
Rx Only	Только для профессионального использования в стоматологии
 0086	Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС
	Баркод
	Открыть блистер
	Цветовая маркировка (только для платформ RP (Узкая), NP (Стандартная), WP (Широкая)) пурпурный - платформа NP (Узкая), желтый - платформа RP (Стандартная), голубой – платформа WP (Широкая)

Маркировка стерильных медицинских изделий:

«Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями» включает в себя следующую информацию:

- Фирма, адрес и логотип производителя.
- Наименование медицинского изделия
- Номер артикула и номер лота
- Обратитесь к инструкции по применению
- Не использовать при повреждении упаковки
- Символ «Стерильная» и стерилизация с помощью радиации
- Использовать до
- Только для профессионального использования в стоматологии

Пример маркировки на стерильное медицинское изделие на русском языке представлен ниже:

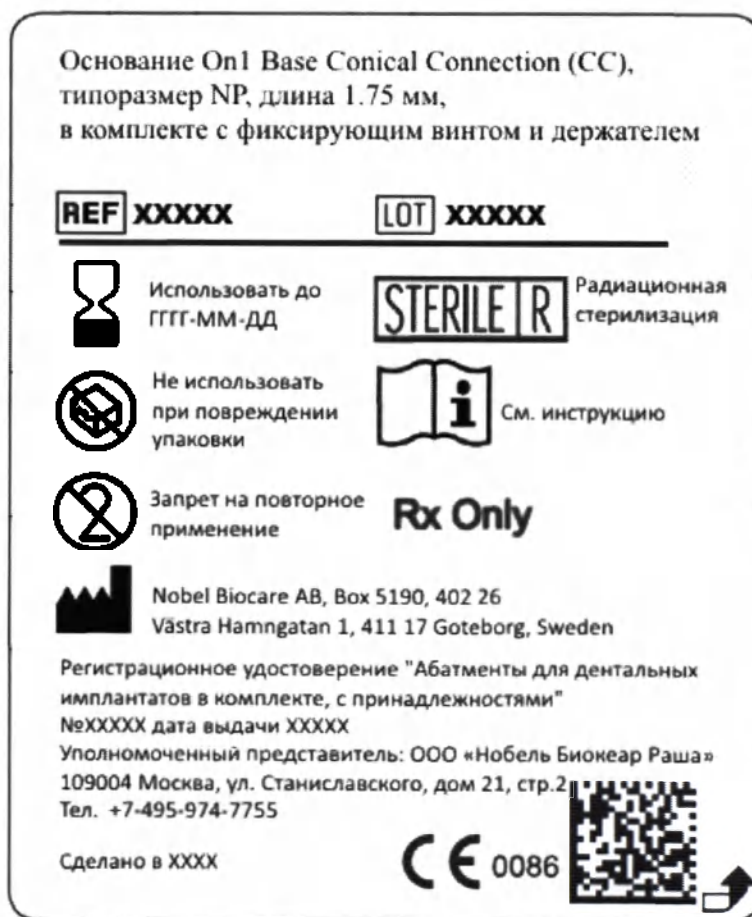

В маркировке используются следующие символы:

	Код партии
	Номер по каталогу

	Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Запрет на повторное применение
	Использовать до ГТГГ-ММ-ДД
	Изготовитель
Rx Only	Только для профессионального использования в стоматологии
 0086	Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС
	Баркод
	MPT совместимость (применимо только для совместимых изделий)
	Открыть блистер

Маркировка нестерильных медицинских изделий многоразового использования:
«Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями» включает в себя следующую информацию:

- Фирма, адрес и логотип производителя.
- Наименование медицинского изделия

- Номер артикула и номер лота
- Обратитесь к инструкции по применению
- Не использовать при повреждении упаковки
- Символ «Не стерильная»
- Дата изготовления
- Только для профессионального использования в стоматологии

Пример маркировки на нестерильное медицинское изделие многоразового использования на русском языке представлен ниже:

Лабораторный винт, уровень имплантатов
Lab Screw Implant Level Branemark System (Bmk Syst),
типоразмер WP

REF **XXXXXX** LOT **XXXXXX**

 Дата изготовления
ГГГГ-ММ-ДД

 См. инструкцию

 Не стерильно

Rx Only 

 Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Goteborg, Sweden

Регистрационное удостоверение "Абатменты для дентальных
имплантатов в комплекте, с принадлежностями"
№XXXXXX дата выдачи XXXXX


Уполномоченный представитель: ООО «Нобель Биокер Раша»
109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2
Тел. +7-495-974-7755

Сделано в XXXX

 0086 

В маркировке используются следующие символы:

	Код партии
	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению

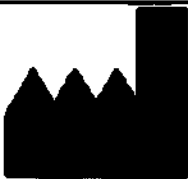	Не стерильно
	Дата изготовления
	Изготовитель
Rx Only	Только для профессионального использования в стоматологии
CE 0086	Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС
	Баркод
	Открыть блистер

Транспортирование.

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при следующих условиях окружающей среды:

- температура окружающего воздуха от – 20 °С до + 60 °С;
- относительная влажность от 10 % до 95 %;

Расстановка и крепление ящиков с системами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения, падение, повреждение упаковки.

Транспортировка может осуществляться любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Не транспортировать вместе с опасными грузами.

Условия хранения:

Абатменты для дентальных имплантатов, в комплекте с принадлежностями должны храниться в оригинальных упаковках до момента использования.

Длительное хранение изделия производится в упаковке предприятия-изготовителя на стеллажах в сухом темном месте в соответствии с условиями:

- температура окружающего воздуха от 0 °С до +40 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

Необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей на изделия в первичной упаковке, и хранить на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Дата истечения срока годности указана на индивидуальной упаковке.

15 ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА РИСКА.

Абатменты без захвата GoldAdapt Non-Engaging Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом (меры предосторожности):

- В процессе установки отрегулировать устройство с учетом оси вставки имплантата, не допуская разрушений и повреждения резьбы.

- Убедиться, что изделие хорошо вставлено в имплантат. Для этого рекомендуется выполнить периапикальную рентгенографию с использованием метода определения параллелизма.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.

- Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной гигиене полости рта.

- Все хирургические инструменты и приспособления следует содержать в хорошем состоянии и избегать повреждения абатментов или других компонентов.

- Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бифосфонаты.

- В общем случае установка абатментов и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании фиксирующего винта. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.

- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

- Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.

- Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.

- Техное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного функционально-эстетического лечения.

Абатменты с захватами золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Gold/Plastic / Абатменты без захвата золотые/пластиковые Direct Abutment Engaging Non-Engaging Gold/Plastic, в комплекте с фиксирующим винтом (меры предосторожности):

- Что касается системного аспекта, следует учитывать общее состояние пациента согласно соответствующей литературе. Что касается локального аспекта необходимо учитывать состояние тканей в полости рта. Данный продукт предназначен для разового использования и не может подвергаться повторной стерилизации.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.
- Настоящее изделие следует устанавливать незамедлительно после вскрытия упаковки в течение хирургической операции. В противном случае — утилизировать.
- Применение более высокого крутящего момента вставки, чем рекомендуемый, и несоответствующих имплантоводов может привести к повреждению материала и неисправности системы.
- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование инструментов и/или имплантатов и/или протезных абатментов других систем не гарантирует высокий успех операции и служит причиной для аннулирования гарантии на продукцию.
- Следить за тем, чтобы пациент не мог проглотить или вдохнуть детали.
- Особые меры предосторожности следует принимать во время закупорки, чтобы не допустить недостаточного или избыточного межокклюзионного пространства.
- Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, связанные с комплектом имплантата/протеза, и привести, например, к потере или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.
- В процессе установки отрегулировать абатмент с учетом оси вставки имплантата, не допуская зажима и повреждения резьбы.
- Убедиться, что абатмент хорошо вставлен в имплантат. Для этого рекомендуется выполнить периапикальную рентгенографию с использованием метода определения параллелизма.
- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании фиксирующего винта. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.
- Не использовать временный цемент для фиксации керамических коронок из-за риска образования микротрещин. Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуем проводить регулярные комплексные осмотры пациентов после лечения с применением имплантатов и информировать о правильной гигиене полости рта.
- Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.
- Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.
- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

Абатменты универсальные без захвата On1 Universal Abutment Non-Engaging / Абатменты универсальные On1 Universal Abutment, в комплекте с ортопедическим винтом и выгораемым колпачком (меры предосторожности):

- Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.
- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- В общем случае установка абатментов и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

- Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.

- Все компоненты, инструменты и принадлежности, применяемые в ходе хирургического вмешательства, необходимо содержать в хорошем состоянии и чистоте, а также избегать повреждения инструментарием абатментов или других компонентов

- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

- Не использовать временный цемент для фиксации керамических коронок из-за риска образования микротрещин. Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуем проводить регулярные комплексные осмотры пациентов после лечения с применением имплантатов и информировать о правильной гигиене полости рта.

- Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной гигиене полости рта.

- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании фиксирующего винта. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.

- Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.

- Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.

- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

Абатменты эстетические On1 Esthetic Abutment Titanium, в комплекте с ортопедическим винтом (меры предосторожности):

- Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- В общем случае установка абатментов и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

- Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.

- Все компоненты, инструменты и принадлежности, применяемые в ходе хирургического вмешательства, необходимо содержать в хорошем состоянии и чистоте, а также избегать повреждения инструментариум абатментов или других компонентов
- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.
- Не использовать временный цемент для фиксации керамических коронок из-за риска образования микротрещин. Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуем проводить регулярные комплексные осмотры пациентов после лечения с применением имплантатов и информировать о правильной гигиене полости рта.
- Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной гигиене полости рта.
- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании ортопедического винта. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.
- Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.
- Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.
- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

Абатменты временные с захватом Temporary Snappy Abutment Engaging Conical Connection (CC) в комплекте с фиксирующим винтом (меры предосторожности):

- Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.
- Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента после имплантологического лечения и информировать его о правильной гигиене полости рта.
- Все хирургические инструменты и приспособления следует содержать в надлежащем состоянии и избегать повреждения абатментов или других компонентов. Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости).
- С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.
- В общем случае установка абатментов и моделирование ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.
- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.
- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании фиксирующего винта. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.

• Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

• Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.

• Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.

• Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

• Срок ношения абатментов временных с захватом Temporary Snappy Abutment Engaging Conical Connection (CC) составляет не более 180 дней.

• Абатменты временные с захватом Temporary Snappy Abutment Engaging Conical Connection (CC) должны быть выведены из окклюзии и не должны применяться для протезирования при полной адентии.

Основания Universal Base External Hex Connection/ Основания Universal Base Tri-Channel Connection, в комплекте с выгораемым колпачком и фиксирующим винтом (меры предосторожности):

• Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

• Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.

• Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании фиксирующего винта. Чрезмерное усилие фиксации основания может привести к перелому винта.

• Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.

• Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеointеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

• Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

• В общем случае установка оснований и моделирование ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

• Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.

• Все хирургические инструменты и приспособления следует содержать в надлежащем состоянии и избегать повреждения абатментов или других компонентов. Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления мягких тканей или на процесс остеointеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в

челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости).

- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

- Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной гигиене полости рта.

Основания On1 Base Conical Connection (CC), в комплекте с фиксирующим винтом и держателем (меры предосторожности):

- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

- Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

- Стерильность гарантируется только при условии целостности блистерной упаковки.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- В общем случае установка оснований и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

- Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.

- Все компоненты, инструменты и принадлежности, применяемые в ходе хирургического вмешательства, необходимо содержать в хорошем состоянии и чистоте, а также избегать повреждения инструментарием абатментов или других компонентов

- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

- Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной гигиене полости рта.

- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании фиксирующего винта. Чрезмерное усилие фиксации основания может привести к перелому винта.

- Докторам, как начинающим работать с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.

- Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения.

Зажимающие колпачки On1 Healing Cap/ Заживляющие колпачки On1 IOS Healing Cap, в комплекте с ортопедическим винтом и держателем (меры предосторожности):

- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

• Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости). С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

• Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

• Стерильность гарантируется только при условии целостности блистерной упаковки.

• В общем случае установка заживляющих колпачков и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

• Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона абатмента.

• Все компоненты, инструменты и принадлежности, применяемые в ходе хирургического вмешательства, необходимо содержать в хорошем состоянии и чистоте, а также избегать повреждения инструментарием абатментов или других компонентов

• Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

• Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента и информировать его о правильной гигиене полости рта.

• Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании ортопедического винта. Чрезмерное усилие фиксации заживляющего колпачка может привести к перелому винта.

Колпачки выгораемые для основания Universal Base Burn-out Coping/ Колпачки золотые/пластиковые PME Coping Gold/Plastic, в комплекте с винтом (меры предосторожности):

• Ненадлежащее планирование может поставить под угрозу функционирование имплантата протеза, что приведет к появлению дефекта системы, например, к потере или поломке имплантата, ослаблению или поломке винта для протезирования.

• Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

• Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

• В общем случае установка колпачков выгораемых и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

• Перед началом каждой процедуры проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», учитывая срок их службы. Заменять инструменты при появлении повреждений, удалении маркировки, снижении степени остроты, деформации и износе.

• Всегда выполнять последовательность использования изделий «Nobel Biocare AB». Использование протезных компонентов и/или инструментов других производителей не гарантирует надлежащее функционирование имплантируемой системы «Nobel Biocare AB» и аннулирует любые гарантии, предоставленные в отношении изделия.

- Специалист несет ответственность за использование изделий «Nobel Biocare AB» в соответствии с инструкцией по применению и должен определять, подходят ли они для конкретного пациента.

Цилиндры золотые с коническим закруглением Gold Cylinder with Chamfer Conical (меры предосторожности):

- Ненадлежащее планирование может поставить под угрозу функционирование имплантата протеза, что приведет к появлению дефекта системы, например, к потере или поломке имплантата, ослаблению или поломке винта для протезирования.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

- В общем случае установка цилиндров золотых с коническими закруглениями и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

- Перед началом каждой процедуры проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», учитывая срок их службы. Заменять инструменты при появлении повреждений, удалении маркировки, снижении степени остроты, деформации и износе.

- Всегда выполнять последовательность использования изделий «Nobel Biocare AB». Использование компонентов и/или инструментов других производителей не гарантирует надлежащее функционирование имплантируемой системы «Nobel Biocare AB» и аннулирует любые гарантии, предоставленные в отношении изделия.

- Специалист несет ответственность за использование изделий «Nobel Biocare AB» в соответствии с инструкцией по применению и должен определять, подходят ли они для конкретного пациента.

Трансферы для открытой ложки Impression Coping Open Tray NobelReplace® (NobRpl), в комплекте с винтом и кольцом O-ring/ Трансферы для открытой ложки PME Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом/ Трансферы для открытой ложки Transfer Assembly Hex Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring/ Трансферы для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray, в комплекте с винтом и кольцом O-ring/ Трансферы, уровень имплантата Implant Level Impression Coping NobelPerfect®, типоразмер NP, в комплекте с винтом/ Трансферы под мостовидный протез для открытой ложки Impression Coping Open Tray Conical Connection Bridge, в комплекте с винтом и кольцом O-ring/ Трансферы без захвата для открытой ложки On1 Impression Coping Open Tray Non-Engaging, в комплекте с винтом и кольцом O-ring/ Трансферы для закрытой ложки On1 Impression Coping Closed Tray, в комплекте с винтом/ Трансферы Impression Coping EsthetiCone & Angulated Abutment (меры предосторожности):

- Что касается системного аспекта, следует учитывать общее состояние пациента согласно соответствующей литературе. Что касается локального аспекта необходимо учитывать состояние тканей в полости рта.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.
- Метод снятия оттиска открытой ложкой не рекомендуется для пациентов с узким отверстием рта.
- Необходимо проверять, чтобы устойчивость имплантата позволяла выдерживать процедуры вставки и извлечения слепочного трансфера.
- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование инструментов и/или имплантатов и/или протезных абатментов других систем не гарантирует высокий успех операции и служит причиной для аннулирования гарантии на продукцию.
- Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, связанные с комплектом имплантата/протеза, и привести, например, к потере имплантата или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.
- В процессе установки отрегулировать устройство с учетом оси вставки имплантата, не допуская зажима и повреждения резьбы.
- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании винтов. Чрезмерное усилие фиксации трансферов может привести к перелому винта.
- Всегда выполнять последовательность использования изделий «Nobel Biocare AB». Использование компонентов и/или инструментов других производителей не гарантирует надлежащее функционирование имплантируемой системы «Nobel Biocare AB» и аннулирует любые гарантии, предоставленные в отношении изделия.

Трансферные пины с установленной резьбой Thread Tined Transfer Pin, Non-Hex, длина 3.25 (меры предосторожности):

- Ненадлежащее планирование может поставить под угрозу функционирование имплантата протеза, что приведет к появлению дефекта системы.
- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.
- Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.
- В общем случае установка трансферных пинов и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.
- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании винтов. Чрезмерное усилие фиксации трансферных пинов может привести к разрушению изделия.
- Перед началом каждой процедуры проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», учитывая срок их службы. Заменять инструменты при появлении повреждений, удалении маркировки, снижении степени остроты, деформации и износе.
- Всегда выполнять последовательность использования изделий «Nobel Biocare AB». Использование протезных компонентов и/или инструментов других производителей не гарантирует надлежащее функционирование имплантируемой системы «Nobel Biocare AB» и аннулирует любые гарантии, предоставленные в отношении изделия.
- Специалист несет ответственность за использование изделий «Nobel Biocare AB» в соответствии с инструкцией по применению и должен определять, подходят ли они для конкретного пациента.

- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

Аналоги основания On1 Base Replica, в комплекте с клиническим винтом/ Аналоги On1 IOS Replica, в комплекте с клиническим винтом (меры предосторожности):

- Обеспечить совместимость аналога с выбранным трансфером.
- После изготовления протеза оценить его посадку на аналоге.
- Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, связанные с комплектом имплантата/протеза, и привести, например, к потере или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.
- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.
- При изготовлении протеза проверить крутящий момент, указанный для используемого протезного компонента. Чрезмерный крутящий момент может привести к нежелательным результатам и неисправности системы.
- Перед каждой процедурой проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», всегда учитывая их срок службы. При обнаружении повреждений, стирания меток, притупление, деформаций или износа следует заменить инструмент.
- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование компонентов и/или инструментов другого производителя не гарантирует высокий успех установки системы имплантации «Nobel Biocare AB» и служит причиной для отклонения претензий в гарантийных случаях
- Специалист несет ответственность за использование изделий «Nobel Biocare AB» в соответствии с инструкцией по применению и должен определять, подходят ли они для конкретного пациента.
- Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

Лабораторные винты угловые Lab Screw Multi-unit Angled NobelReplace® (NobRpl)/ Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level NobelReplace® (NobRpl)/ Лабораторные винты, уровень имплантов Lab Screw Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0/ Лабораторные винты, уровень имплантатов Lab Screw Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP/ Лабораторные винты Lab Screw Conical Connection (CC), типоразмер RP/WP Ext Hex RP, 5 шт в упак./ Лабораторные винты ортопедические On1 Prosthetic Lab Screw, типоразмер NP/RP/WP (меры предосторожности):

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.
- Применение более высокого крутящего момента вставки, чем рекомендуемый, и несоответствующих соединений может привести к повреждению материала и неисправности системы.
- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование инструментов и/или имплантатов и/или протезных компонентов других систем препятствует хорошему функционированию и приводит к аннулированию гарантии на продукт.

- Ни в коем случае не превышайте усилие 35 Н/см при затягивании винтов. Чрезмерное усилие фиксации трансфных пинов может привести к разрушению изделия.
- Неправильное планирование может нанести ущерб функционированию системы имплантат/протез, что приводит к неисправности системе, потере или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.
- В процессе установки отрегулировать устройство с учетом оси вставки имплантата, не допуская разрушений и повреждения резьбы.

Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level Branemark System® (Bmk Syst), типоразмер WP, длина 20 мм/ Направляющие пины, уровень имплантатов Guide Pin Implant Level NobelReplace® (NobRpl)/ Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC NP and Ext Hex, типоразмер NP, длина 20 мм/ Направляющие пины, уровень имплантата Guide Pin Implant Level CC RP/WP and Ext Hex/ Направляющие пины, уровень имплантатов Guided Pin Implant Level Conical Connection (CC), типоразмер 3.0, длина 20 мм (меры предосторожности):

- В процессе установки отрегулировать устройство с учетом оси вставки, не допуская зажима и повреждения резьбы.
- Что касается системного аспекта, следует учитывать общее состояние здоровья пациента по результатам клинического обследования и рентгена перед операцией. В частности, необходимо с особым вниманием относиться к пациентам, имеющим аллергию на лекарственные средства, а также учитывать локальные и системные факторы, способные помешать процессу заживления костных или мягких тканей, или сращения кости. Невыполнение предоперационного анализа может поставить под угрозу успех всей процедуры.
- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.
- Рекомендуемый максимальный момент при установке составляет 10 Н·см.
- Внимательно следить за крутящим моментом для устанавливаемого протезного компонента. Избыточный или недостаточный момент может привести к нежелательному результату.
- Усилие фиксации выше рекомендуемого может привести к потере функционирования системы.

Перед каждой процедурой следует убедиться, что все детали закреплены надлежащим образом.

- Перед каждой процедурой проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», всегда учитывая их срок службы. При обнаружении повреждений, стирания меток, притупления, деформаций или износа следует заменить инструмент.
- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование протезных компонентов и/или инструментов другого производителя не гарантирует высокий успех установки системы имплантации «Nobel Biocare AB» и служит причиной для отклонения претензий в гарантийных случаях
- Квалифицированный специалист несет ответственность за использование продукции Nobel Biocare в соответствии с инструкцией.

Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Conical Connection (CC)/ Цилиндры с пинами для хирургии по шаблонам Guided Cylinder w Pin Unigrip NobelReplace® (NobRpl) (меры предосторожности):

- В процессе установки отрегулировать устройство с учетом оси вставки, не допуская зажима и повреждения резьбы.

- Что касается системного аспекта, следует учитывать общее состояние здоровья пациента по результатам клинического обследования и рентгена перед операцией. В частности, необходимо с особым вниманием относиться к пациентам, имеющим аллергию на лекарственные средства, а также учитывать локальные и системные факторы, способные помешать процессу заживления костных или мягких тканей, или сращения кости. Невыполнение предоперационного анализа может поставить под угрозу успех всей процедуры.

- Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, связанные с комплектом имплантата/протеза, и привести, например, к потере или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- Рекомендуемый максимальный момент при установке составляет 10 Н·см.

- Внимательно следить за крутящим моментом для устанавливаемого протезного компонента. Избыточный или недостаточный момент может привести к нежелательному результату.

- Перед каждой процедурой проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», всегда учитывая их срок службы. При обнаружении повреждений, стирания меток, притупления, деформаций или износа следует заменить инструмент.

- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование протезных компонентов и/или инструментов другого производителя не гарантирует высокий успех установки системы имплантации «Nobel Biocare AB» и служит причиной для отклонения претензий в гарантийных случаях

- Квалифицированный специалист несет ответственность за использование продукции «Nobel Biocare AB» в соответствии с инструкцией.

Защитные аналоги Protection Analog NobelReplace® (NobRpl), 5 шт. в упак (меры предосторожности):

- Обеспечить совместимость аналога.

- После изготовления протеза оценить его посадку на аналоге.

- Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, связанные с комплектом имплантата/протеза, и привести, например, к потере или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.

- Запрещается использовать изделие в случае повреждения упаковки.

- При изготовлении протеза проверить крутящий момент, указанный для используемого протезного компонента. Чрезмерный крутящий момент может привести к нежелательным результатам и неисправности системы.

- Перед каждой процедурой следует убедиться, что все детали закреплены надлежащим образом.

- Перед каждой процедурой проверять состояние хирургических инструментов «Nobel Biocare AB», всегда учитывая их срок службы. При обнаружении повреждений, стирания меток, притупление, деформаций или износа следует заменить инструмент.

- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий производства компании «Nobel Biocare AB». Использование протезных компонентов и/или инструментов другого производителя не гарантирует высокий успех установки системы имплантации «Nobel Biocare AB» и служит причиной для отклонения претензий в гарантийных случаях

• Квалифицированный специалист несет ответственность за использование продукции «Nobel Biocare AB» в соответствии с инструкцией, и определяет, подходит ли она для каждого отдельного пациента

16 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В составе медицинского изделия отсутствуют материалы животного и (или) человеческого происхождения.

17 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВАЛИДАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В составе медицинского изделия отсутствует программное обеспечение.

18 ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

В составе медицинского изделия отсутствуют лекарственные средства, а также компоненты, которые могут оказывать фармацевтическое действие.

19 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Гарантийному обслуживанию и ремонту данные изделия не подлежат.

Компания «Nobel Biocare AB» представляет гарантию на определенные продукты «Nobel Biocare AB». Условия и положения данной гарантии определены в Гарантийной программе Nobel Biocare ("Гарантийной программе"):

1. Гарантии для Лица, осуществляющего лечение.

1.1. Пожизненная гарантия на имплантаты.

Компания «Nobel Biocare AB» гарантирует замену любого имплантата в случае его отторжения костной тканью. Компания «Nobel Biocare AB» гарантирует бесплатную замену имплантата, а также ортопедических компонентов «Nobel Biocare AB», установленных на имплантате на момент отторжения, таким же имплантатом и такими же ортопедическими компонентами Nobel Biocare, какие были установлены на имплантате на момент отторжения (изменения могут быть связаны только с диаметром или длиной).

1.2. Пожизненная гарантия на ортопедические компоненты.

Компания «Nobel Biocare AB» гарантирует бесплатную замену любого ортопедического компонента, за исключением временных или предварительных, аналогичным ортопедическим компонентом. Помимо замены поврежденного ортопедического компонента, компания «Nobel Biocare AB» бесплатно заменит любой невременный и непредварительный ортопедический компонент или имплантат, на которых установлен поврежденный ортопедический компонент, ортопедическим компонентом или имплантатом, если соответствующий ортопедический компонент или имплантат требует замены при замене другого ортопедического компонента, производства «Nobel Biocare AB».

1.3. 10-летняя гарантия на абатменты на имплантатах сторонних производителей.

Если невременный и непредварительный абатмент устанавливается на имплантаты сторонних производителей (не «Nobel Biocare AB»), срок гарантии, указанный выше в пункте

1.2, сокращается до десяти (10) лет с даты установки абатмента на имплантат другого производителя.

1.4. Замена имплантатов сторонних производителей

Компания «Nobel Biocare AB» предлагает замену имплантата стороннего производителя бесплатным имплантатом NobelReplace на следующих условиях

а. Имплантат стороннего производителя был установлен после подтверждения его безопасности и эффективности не менее чем двухлетним клиническим исследованием этого имплантата, установленного не менее чем десяти пациентам, с публикацией результатов исследования в рецензируемом журнале.

б. Продукт NobelProcera или Продукт Procera был установлен на имплантат стороннего производителя после 1 марта 2010 г.

в. Гарантия на Имплантат стороннего производителя, предоставленная этим производителем, недействительна, потому что на этом имплантате стороннего производителя использовался Продукт NobelProcera или Продукт Procera.

г. Лицо, осуществляющее лечение, предоставляет компании «Nobel Biocare AB» копию отказа стороннего производителя от гарантии на имплантат, изготовленный этим производителем.

д. Лицо, осуществляющее лечение, предоставляет компании «Nobel Biocare AB» документацию по конкретному клиническому случаю, включая предварительные рентгенологические данные, послеоперационные рентгенологические данные, последующие контрольные рентгенологические данные, снимок имплантата стороннего производителя на день удаления, удаленный имплантат стороннего производителя, а также Продукт NobelProcera или Продукт Procera.

Объем гарантийных обязательств

Любая гарантия по этой Гарантийной программе ограничивается заменой поврежденного продукта и дополнительных компонентов, указанных в пунктах 1.1–2 (имплантатов и ортопедических компонентов соответственно). Гарантия также включает в себя стоимость отправки одного или нескольких замещающих продуктов Лицу, осуществляющему лечение. В частности, компания «Nobel Biocare AB» не компенсирует Лицу, осуществляющему лечение, или пациенту стоимость любых дополнительных компонентов, инструментов и лечения, а также другие расходы, возникающие в связи с заменой поврежденного продукта. Если какой-либо продукт, подлежащий замене по указанной здесь гарантии, уже недоступен на рынке, может быть выбрано альтернативное решение.

Право на гарантийное обслуживание.

Для получения гарантийного обслуживания, указанного в пунктах 1 и 2, Лицо, осуществляющее лечение, должно:

использовать в рассматриваемом клиническом случае с продуктом «Nobel Biocare AB» только оригинальные хирургические и ортопедические компоненты «Nobel Biocare AB», включая имплантаты, заглушки, формователи десны, постоянные абатменты, ортопедические винты, ортопедические цилиндры, коронки, мостовидные протезы и балки;

проводить лечение в соответствии с рекомендациями и инструкциями компании Nobel Biocare, опубликованными на момент лечения, и в соответствии с общепринятой стоматологической практикой, в частности не использовать никакие противопоказанные имплантационные и реставрационные технологии;

убедиться в том, что пациент соблюдает общепринятые правила и стандарты гигиены полости рта. В случае имплантатов рекомендуется проверять состояние полости рта пациента два раза в год.

На момент подачи анкеты по претензии об отторжении имплантата (по Гарантии), разрушении имплантата или повреждении компонента Nobel Biocare Учетная запись пациента в «Nobel Biocare AB» не должна иметь задолженностей, т. е. все платежи в адрес компании «Nobel Biocare AB» или любой ее дочерней компании должны осуществляться своевременно;

Любое несоблюдение вышеуказанных пунктов (а)–(д) делает гарантии по этой Гарантийной программе недействительными.

Компания «Nobel Biocare AB» не обязана предоставлять гарантии по этой Гарантийной программе на какой-либо продукт «Nobel Biocare AB», если отторжение или повреждение произошло в результате травмы или по вине самого пациента.

Эта Гарантийная программа не распространяется на продукты, специально изготовленные или модифицированные по просьбе Лица, осуществляющего лечение, а также на временные системы имплантатов.

Претензии.

Для предъявления претензии в рамках этой Гарантийной программы в связи с отторжением имплантата (Гарантия) или разрушением имплантата необходимо отправить подписанную и заполненную анкету по претензии, а также сам имплантат и другие компоненты, установленные на нем Лицом, осуществляющим лечение, в компанию «Nobel Biocare AB» в течение трех (3) месяцев после отторжения или повреждения. Обязательно приложите к претензии рентгеновский снимок вышедшего из строя имплантата. Перед отправкой имплантата и других компонентов, использовавшихся при лечении, убедитесь в том, что они прошли стерилизацию.

Изменение или прекращение действия Гарантийной программы.

Компания «Nobel Biocare AB» может в любой момент изменить эту Гарантийную программу или прекратить ее действие полностью или частично. Изменения или прекращение действия Гарантийной программы не затронут гарантии по этой Гарантийной программе на продукты, установленные до внесения изменений или прекращения действия Гарантийной программы.

Ограничения Гарантийной программы.

ВСЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОПИСАНЫ ВЫШЕ В РАЗДЕЛАХ 1 И 2. КОМПАНИЯ NOBEL BIOCARE И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ЛЮБЫЕ КОМПОНЕНТЫ NOBEL BIOCARE, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ НА КОМПОНЕНТЫ NOBEL BIOCARE (УКАЗАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ), ВКЛЮЧАЯ СРЕДИ ПРОЧЕГО ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Компания «Nobel Biocare AB» и ее дочерние компании также отказываются от любой ответственности перед Лицом, осуществляющим лечение, за потерю доходов и прибыли, несоответствие работы лечащего врача общепринятым стандартам стоматологической практики, а также за другие прямые, косвенные, случайные или последующие убытки, понесенные в связи с конструкцией, составом, состоянием, использованием или характеристиками компонентов «Nobel Biocare AB».

Применение гарантии.

Гарантии по этой Гарантийной программе предоставляются исключительно Лицам, осуществляющим лечение, которые удовлетворяют всем требованиям Гарантийной программы, и не распространяются на других лиц или организации, включая любого пациента, за исключением гарантии, предоставляемой непосредственно пациенту в соответствии с вышеуказанным разделом 2.

Полнота соглашения.

Компания «Nobel Biocare AB» и ее дочерние компании не дают никаких гарантий и не берут на себя никаких обязательств по продуктам «Nobel Biocare AB», кроме тех, которые обозначены в этом документе. Эта Гарантийная программа полностью определяет условия предоставления гарантий и заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности относительно предмета этого документа.

Эта Гарантийная программа распространяется на все компании «Nobel Biocare AB».

Для рынков, обслуживаемых дистрибьюторами, могут действовать другие условия. Для получения подробной информации свяжитесь с представителем компании «Nobel Biocare AB».

Примечания:

Для целей этой Гарантийной программы термин «Лицо, осуществляющее лечение» относится к стоматологам, терапевтам и зубным техника.

Для целей этой Гарантийной программы термин «Имплантат стороннего производителя» означает любой имплантат, произведенный компанией, отличной от «Nobel Biocare AB».

Для целей этой Гарантийной программы термин «Рецензируемый журнал» означает журналы, в которых печатаются только статьи, прошедшие так называемое профессиональное рецензирование (обычно слепой процесс, при котором статья оценивается экспертами-исследователями в этой же области).

20 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Общество с ограниченной ответственностью «Нобель Биоскар Раша»,

Адрес: 109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр.2.

Тел.: +7 495 974 77 55, факс: +7 495 974 77 66

В случае возникновения нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) необходимо направить сообщение уполномоченному представителю на территории Российской Федерации.

21 СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения изделий при соблюдении условий хранения: 3 года для стерильных с сохранением стерильности, для нестерильных одноразового применения – срок хранения не установлен, срок службы составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию, для нестерильных многократного использования срок службы составляет 3 года или 250 циклов использования. Количество циклов стерилизации не более 250.

Если любое из стерильных изделий утратило свою стерильность, в частности, если была нарушена целостность упаковки или изделие контактировало с нестерильной поверхностью, которая не входит в процедуру, его нельзя повторно стерилизовать или использовать. Контакт с такими поверхностями, органическими тканями и жидкостями может создать высокий риск заражения для пациента. Не используйте изделие после истечения срока хранения.

Повторное использование извлеченного из организма или модифицированного изделия запрещено.

22 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Правила утилизации:

Утилизация производится в соответствии с установленным порядком и нормативной документацией ЛПУ.

Не утилизируйте использованные медицинские изделия вместе с обычными бытовыми отходами, так как после применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Поэтому переработку и утилизацию использованных изделий необходимо производить в соответствии с нормами надлежащей медицинской практики, а также применимыми законодательными и нормативными актами.

№ П/П	Материал изготовления МИ	Класс отходов.
1	Золотой сплав (60% золота, 19% платина, 20% палладия, 1% иридия)	Б
2	Титановый сплав марки 5 Ti6Al4V-ELI	Б
3	Технически чистый титан класса 1	Б
4	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin) Краситель Magenta MASTERBATCH EPN28153 PINK VAR (не более 3.0% от массы)	Б
5	Полиоксиметилен (POM) Acetal (Delrin) Краситель MASTERBATCH YELLOW PYN21966 (не более 3.0% от массы)	Б
6	Полиоксиметилен (POM) Hostaform MT24	Б
7	Полиэфирэфиркетон (PEEK), VestaKEEP M20G	Б
8	Полиэфирэфиркетон (PEEK), PEEK-OPTIMA	Б
9	Силикон RS00170	Б
10	Нержавеющая сталь AISI 316	Б
11	Нержавеющая сталь AISI 303 (или 1.4305)	А
12	Нержавеющая сталь AISI 440FSe (S 44023)	А

Утилизация должна осуществляться в соответствии нормами и правилами, утвержденными Российским законодательством.

23 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ИЛИ ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

№ П/П	Наименование	Версия	Дата
1	Выпуск эксплуатационной документации на русском	1	24.10.2019

[Перевод надписей, штампов и печати на документе «эксплуатационная документация
медицинского изделия «Абатменты для детальных имплантатов в комплексе, с
принадлежностями», представленном на русском языке]

/логотип: «Нобель Байокер»™/

/Печать нотариуса/

«Утверждаю»
«Нобель Байокер АБ» (Nobel Biocare AB)
Менеджер отдела нормативно-правового
регулирования
(должность)
Алессандро Райнис
(имя)
/Подпись/
подпись

Штамп: /«Нобель Байокер АБ»
а/я 5190
SE- 402 26 Гётеборг
Швеция/

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Абатменты для дентальных имплантатов в комплекте, с принадлежностями»

Штамп: /Я, нижеподписавшийся Эрик фон Платен, нотариус города Стокгольма,
настоящим удостоверяю, что:
Г-н Алессандро Райнис
подписал настоящий документ.
г. Стокгольм, 13.11.2019 г.
В силу занимаемой должности
/Подпись/
Нотариус
Эрик фон Платен/

/Печать нотариуса/

Печать: /НОТАРИУС Г. СТОКГОЛЬМ *
ЭРИК ФОН ПЛАТЕН/

2019

Переводчик:

А. А. Фрутаева *Виктор Викторов*

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU