

SIC invent AG
Birmannsgasse 3
CH-4055 Basel
Phone: +41 (0)61 260 24 60
Fax: +41 (0)61 261 39 68
www.sic-invent.com




«Утверждаю»
«I certify»

Управляющий Директор
Managing Director

Георг Шилли
Georg Shilli

«СИК инвент АГ», Швейцария
«SIC invent AG», Switzerland

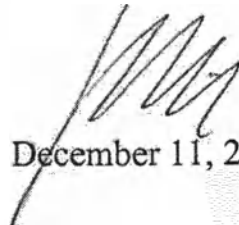
December 11, 2018

Инструкция по эксплуатации
Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах марки SIC с
принадлежностями,
производства «SIC invent AG», Швейцария.

Настоящая инструкция подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416).

Версия 1

1. Наименование медицинского изделия

«Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах марки SIC с принадлежностями».

1. Абатменты для дентального имплантата марки SIC:

1.1 Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, blue- 1 шт.

1.2 Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, red – 1 шт.

1.3 Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap) – 1 шт.

1.4 Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap) – 1 шт.

1.5 Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap) – 1 шт.

1.6 Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap) – 1 шт.;

1.7 Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap) – 1 шт.;

1.8 Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap) – 1 шт.;

1.9 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.10 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.11 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.12 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap); – 1 шт.;

1.13 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.14 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.15 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.16 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.17 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.18 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.19 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.20 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

1.21 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap) – 1 шт.;

- 1.22 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.
- 1.23 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.24 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.25 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.26 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.27 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.28 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.29 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.30 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.31 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap);– 1 шт.;
- 1.32 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.33 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.34 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.35 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.36 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.37 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.38 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)– 1 шт.;
- 1.39 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 1.5 mm– 1 шт.;
- 1.40 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 3.0 mm– 1 шт.;
- 1.41 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 1.5 mm– 1 шт.;
- 1.42 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 3.0 mm– 1 шт.;
- 1.43 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.44 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.45 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.46 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.47 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;

- 1.22 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.23 Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.24 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.25 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.26 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.27 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.28 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.29 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.30 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.31 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap);— 1 шт.;
- 1.32 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.33 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.34 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.35 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.36 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.37 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.38 Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)— 1 шт.;
- 1.39 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 1.5 mm— 1 шт.;
- 1.40 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 3.0 mm— 1 шт.;
- 1.41 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 1.5 mm— 1 шт.;
- 1.42 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 3.0 mm— 1 шт.;
- 1.43 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)— 1 шт.;
- 1.44 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)— 1 шт.;
- 1.45 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)— 1 шт.;
- 1.46 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)— 1 шт.;
- 1.47 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)— 1 шт.;

- 1.48 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.49 Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.50 Абатмент SICvantage Positioning Aid 16° and 30° for SICvantage "Safe on Four"– 1 шт.;
- 1.51 Абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", Titanium (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")– 1 шт.;
- 1.52 Абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", residue-free burn-out (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")– 1 шт.;
- 1.53 Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.54 Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.55 Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.56 Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)– 1 шт.;
- 1.57 Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM grey, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)– 1 шт.;
- 1.58 Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM blue, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw);– 1 шт.;
- 1.59 Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM red, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SICStandard Fixation Screw)– 1 шт.;
- 1.60 Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 1.0 mm– 1 шт.;
- 1.61 Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 2.0 mm– 1 шт.;
- 1.62 Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 3.0 mm– 1 шт.;
- 1.63 Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 4.0 mm– 1 шт.;
- 1.64 Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 5.0 mm– 1 шт.;
- 1.65 Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 6.0 mm– 1 шт.;
- 1.66 Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 1.0 mm– 1 шт.;
- 1.67 Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 2.0 mm– 1 шт.;
- 1.68 Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 3.0 mm– 1 шт.;
- 1.69 Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 4.0 mm– 1 шт.;
- 1.70 Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 5.0 mm– 1 шт.;
- 1.71 Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 6.0 mm– 1 шт.;
- 1.72 Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short) – 1 шт.;
- 1.73 Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short) – 1 шт.;
- 1.74 Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short) – 1 шт.;
- 1.75 Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short) – 1 шт.;
- 1.76 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)– 1 шт.;
- 1.77 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.78 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.79 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;

- 1.80 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.81 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.82 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.83 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.84 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.85 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.86 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 1.87 Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2. Титановое основание для дентального имплантата марки SIC:**
- 2.1 Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.2 Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.3 Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.4 Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.5 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.7 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey) – 1 шт.;
- 2.6 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SICvantage Fixation Screw for grey) – 1 шт.;
- 2.7 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey) – 1 шт.;
- 2.8 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, CEREC (incl. SICvantage Fixation Screw for grey) – 1 шт.;
- 2.9 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.10 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.11 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.12 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.13 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.14 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.15 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.16 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 2.17 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;

3. Скан-адаптеры SIC:

- 3.1 Скан-адаптер SIC Scan Adapter Ø 3.3 mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 3.2 Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter grey, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SICvantage Fixation Screw for grey) – 1 шт.;
- 3.3 Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter blue, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;
- 3.4 Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter red, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.;

4. Формирователи для дентального имплантата марки SIC:

- 4.1 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 1.0 mm – 1 шт.;
- 4.2 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 2.0 mm – 1 шт.;
- 4.3 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 3.0 mm – 1 шт.;
- 4.4 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 4.0 mm – 1 шт.;
- 4.5 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 5.0 mm – 1 шт.;
- 4.6 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 1.0 mm – 1 шт.;
- 4.7 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 2.0 mm – 1 шт.;
- 4.8 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 3.0 mm – 1 шт.;
- 4.9 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 4.0 mm – 1 шт.;
- 4.10 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 5.0 mm – 1 шт.;
- 4.11 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 1.5 mm – 1 шт.;
- 4.12 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 3.0 mm – 1 шт.;
- 4.13 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 5.0 mm – 1 шт.;
- 4.14 Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, blue – 1 шт.;
- 4.15 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 1.0 mm – 1 шт.;
- 4.16 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 2.0 mm – 1 шт.;
- 4.17 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 3.0 mm – 1 шт.;
- 4.18 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 4.0 mm – 1 шт.;
- 4.19 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 5.0 mm – 1 шт.;
- 4.20 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 1.5 mm – 1 шт.;
- 4.21 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 3.0 mm – 1 шт.;
- 4.22 Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 5.0 mm – 1 шт.;
- 4.23 Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, red – 1 шт.;
- 4.24 Формирователь SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click – 1 шт.;

5. Трансферы для дентального имплантата марки SIC:

- 5.1 Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click) – 1 шт.;
- 5.2 Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click) – 1 шт.;
- 5.3 Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click) – 1 шт.;
- 5.4 Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click) – 1 шт.;
- 5.5 Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click) – 1 шт.;
- 5.6 Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click) – 1 шт.;
- 5.7 Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm); – 1 шт.;
- 5.8 Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm); – 1 шт.;

- 5.9 Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm); – 1 шт.;
- 5.10 Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm) – 1 шт.;
- 5.11 Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm) – 1 шт.;
- 5.12 Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm) – 1 шт.;
- 5.13 Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm); – 1 шт.;
- 5.14 Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm) – 1 шт.;
- 5.15 Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm) – 1 шт.;
- 5.16 Трансфер SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black – 1 шт.;
- 5.17 Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four", Open Tray Technique (incl. SIC Fixation Screw 16.0 mm) – 1 шт.;
- 5.18 Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click – 1 шт.;

6. Аналоги имплантатов марки SIC:

- 6.1 Аналог имплантата SICvantage Lab Implant grey – 1 шт.;
- 6.2 Аналог имплантата SICvantage Lab Implant blue – 1 шт.;
- 6.3 Аналог имплантата SICvantage Lab Implant red – 1 шт.;
- 6.4 Аналог имплантата SIC LocFix Lab Implant – 1 шт.;

7. Винт абатмента для дентального имплантата марки SIC:

- 7.1 Винт абатмента SICvantage Fixation Screw for prosthetics in grey – 1 шт.;
- 7.2 Винт абатмента SICvantage Fixation Screw, short – 1 шт.;

8. Колпачки для абатментов и трансферов марки SIC:

- 8.1 Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, red – 1 шт.;
- 8.2 Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, blue – 1 шт.;
- 8.3 Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, grey – 1 шт.;
- 8.4 Колпачок SIC LocFix Denture Cap incl. Processing Male, black – 1 шт.;
- 8.5 Колпачок SIC Transfer Caps with Click, 5 pieces – 1 шт.;
- 8.6 Колпачок SIC Transfer Caps with Click, grey, 5 pieces – 1 шт.;

9. Матрицы для абатментов SIC:

- 9.1 Матрица к абатменту SIC LocFix Processing Male, 4 pieces, black – 1 шт.;
- 9.2 Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, clear, 1.9 kg retention force – 1 шт.;
- 9.3 Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, pink, 1.1 kg retention force – 1 шт.;
- 9.4 Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, blue, 0.7 kg retention force – 1 шт.;
- 9.5 Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, green, 1.8 kg retention force – 1 шт.;
- 9.6 Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, orange, 1.1 kg retention force – 1 шт.;
- 9.7 Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, red, 0.6 kg retention force – 1 шт.;

10. Принадлежности:

- 10.1 Позиционер абатмента SICvantage Positioning Aid 16° and 30° for SICvantage "Safe on Four" – 1 шт.
- 10.2 Кольцо изоляционное SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces- 1 упаковка* 4 шт.

2. Сведения о производителе и уполномоченном представителе производителя медицинского изделия

Производитель:

«SIC invent AG», Switzerland («СИК инвент АГ», Швейцария), Birmanngasse 3, 4055 Basel, Switzerland, e-mail: contact.switzerland@sic-invent.com, tel: +41 61 260 24 60

Место производства:

«CPM Precision GmbH» (ЦПМ Пресижн ГмбХ), Im Rott 5-10 69493 Hirschberg, Germany.

«KSP GmbH CNC-Technik» (КСП ГмбХ ЦНЦ- Техник), Josef-Beyerle-Straße 14, 71263 Weil der Stadt Germany.

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эс.Ти.Ай.дент». Адрес: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, , эт. 1, к. 179-180, тел.: 8 (495) 780-52-45/46

3. Классификация

Ортопедические элементы для дентальной имплантации SIC являются медицинскими изделиями класса IIa в соответствии с Приложением IX MDD 93/42 ЕЕС.

4. Назначение

Ортопедические элементы для дентальной имплантации SIC предназначены для использования с дентальными имплантатами SIC для протезных реставраций от замены одного зуба до полной реставрации дуги с помощью фиксированных или съемных надстроек.

5. Область применения

Стоматология дентальная, имплантология, ортопедическая стоматология

Потенциальные потребители – стоматологи ортопеды, зубные техники.

6. Показания к применению

Отсутствие одного или нескольких зуба(ов) и связанная с этим необходимость установки ортопедической конструкции. Восстановление жевательных функций после потери зубов.

7. Противопоказания

- Высокие нагрузки на структуры с дополнительным осевым центром силы.
- Нешинированные ортопедические конструкции при соотношении длины коронка и имплантата более чем 1.2
- Нешинированные конструкции на угловых абатментах в области высоких жевательных нагрузок с опорой на имплантаты маленького диаметра.
- Нешинированные конструкции с углом более 25 градусов.
- Присутствие бруксизма или других устных парафункциональных привычек у пациента.

- Гиперчувствительность к одному из металлов в сплаве.

8. Побочные эффекты

- Возможны аллергии на металлы в сплаве (Al, V), но редко.
- Системные побочные эффекты, вызванные металлами в сплаве, были выявлены в конкретных случаях.

При использовании ортопедических элементов иногда возникали осложнения:

- Элементы, используемые во рту пациента, могут быть проглочены.
- Из-за чрезмерного крутящего момента крепежный винт SIC абатмента может быть сломан.
- Титановые элементы обесцвечиваются во время стерилизации из-за остаточных чистящих средств (без изменения механической стабильности или биосовместимости).


9. Описание медицинских изделий

9.1. Информация об интерфейсе, совместимость


Ортопедические элементы SIC с шестигранным интерфейсом имплантатов SIC:

Ортопедические элементы, имеющие цилиндрический шестигранный интерфейс имплантата, предназначены только для использования с SICase или SICmax имплантатами.

SICase

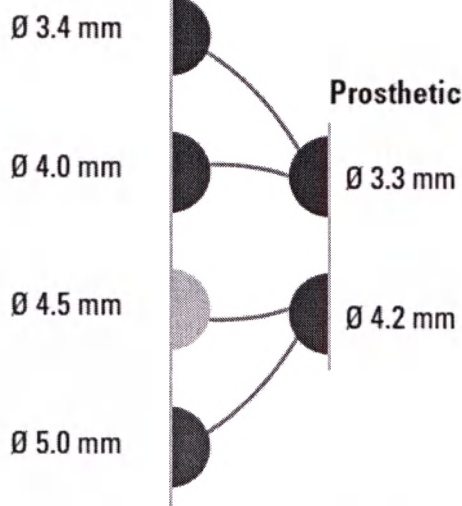


SICmax

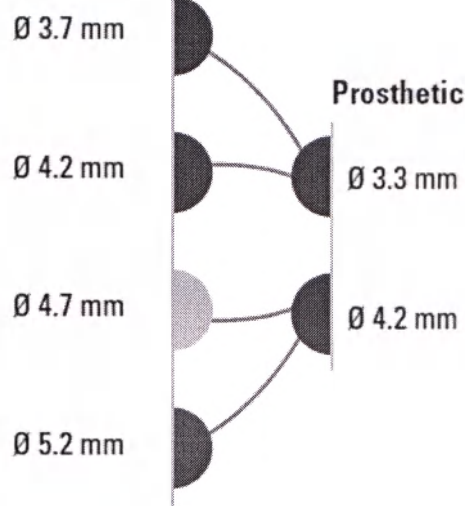

Ортопедические элементы SIC с интерфейсом имплантата SICvantage

Ортопедические элементы SIC, имеющие конический интерфейс имплантата SICvantage, должны использоваться только с имплантатами SICvantage. Интерфейс имплантата SICvantage характеризуется крутым склоном и самоблокирующейся конической секцией (Morse Taper).

SICvantage max

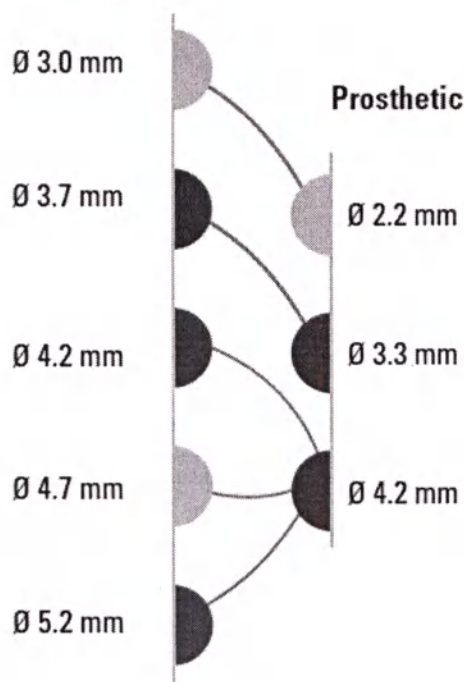


Абатменты SICvantage должны быть вертикально ввинчены с определенным крутящим моментом 20 Нсм с помощью крепежного винта, поставляемого с абатментом SICvantage или устанавливать на месте без крепежного винта SIC и закреплять легким постукиванием. Во время окончательной сборки элементов SIC, фрикционная припасовка проходит через коническую секцию интерфейса. Соединение ослабляется с помощью специального инструмента экстрактора. Для этого необходимо удалить крепежный винт SIC от элементов протеза SIC. Затем инструмент SIC Extractor Tool должен быть завинчен в открытый винтовой канал абатмента за пределы упора, таким образом, ослабляя абатмент.

9.2. Описание и внешний вид

Описание и внешний вид медицинского изделия представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Номер	Наименование	Описание	Внешний вид
1.	Абатменты для дентального имплантата SIC:		
1.1	Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, blue	SICvantage TempFix защелкивается на установочном штифте и облегчает незамедлительное восстановление, удовлетворяющего высочайшим эстетическим требованиям. Также он дает	

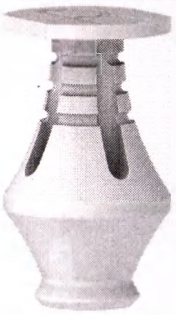1.2	Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, red	возможность контурировать индивидуальный формирователь десны, в качестве альтернативы цилиндрическим TempCap. Кроме того, TempFix подходит для прямого снятия оттиска. Абатмент TempFix может защелкиваться на установочном штифте без цемента. Абатмент состоит из нового высокотехнологичного материала PEEK-180.	
1.3	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap)	Абатменты SICvantage Standard доступны в различных исполнениях для изготовления отдельных цементных или винтовых коронок и мостов.	
1.4	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	Конструкция абатмента имеет форму подготовленного зуба и обеспечивает легкое и недорогое изготовление вторичных частей с минимальным снятием материала - аналогично протезному лечению натурального зуба – вне зависимости от типа восстановления отдельной коронкой или мостом с длинным пролетом. Абатмент имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки – SICvantage Swiss Cross. Абатмент имеет выпуклый / вогнутый десенный профиль от уровня имплантата до высоты десны (GH) в передней (узкой) и соответственно задней (широкой) конструкции. Функциональная секция для установки коронки имеет плоскую поверхность, которая предотвращает вращение. Встроенная поперечная резьба обеспечивает подготовку	
1.5	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).		
1.6	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).		
1.7	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).		

1.8	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	горизонтального резьбового крепления коронки с абатментом. Конус Морзе с углом 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Абатменты можно индивидуализировать путем обрезки и полировки. Стандартный абатмент фиксируется в положении на имплантате либо без удерживающего винта (путем легкого прикусывания или постукивания), либо при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
1.9	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.10	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.11	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.12	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.13	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.14	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		

1.15	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.16	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.17	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.18	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.19	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.20	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.21	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.22	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.23	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	

1.24	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.25	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.26	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.27	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.28	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.29	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.30	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	
1.31	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap);.	
1.32	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	

1.33	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.34	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.35	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.36	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.37	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.38	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).		
1.39	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 1.5 mm.	SIC «Safe on Four» представляют собой усовершенствованные «балочные и мостовые абатменты». В «Safe on Four» абатменты Multi-Unit «Safe on Four» напрямую привинчиваются к соответствующему имплантату. Таким образом, создается фиксированная трансгингивальная платформа, на которой в	
1.40	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 3.0 mm.		
1.41	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 1.5 mm.		

1.42	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 3.0 mm.	дальнейшем проводятся все работы по протезированию и лабораторные технические работы. Система предназначена для фиксированного или съемного моста или полных восстановлений при условии, что дистальные имплантаты могут иметь максимальный угол имплантации 30°. Максимальная доступность костной ткани используется дистально путем смещения наиболее дистально расположенного углового имплантата. При разработке системы особое значение придавалось обеспечению максимально возможной стабильности отдельных компонентов. Крутящий момент 30 Нсм.	
1.43	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.44	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.45	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.46	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.47	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.48	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.49	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.50	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).		
1.51	Абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", Titanium (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")	Crown Base «TITANIUM» для «Safe on Four» используется в сочетании с балочными и мостовыми абатментами и соответственно со стандартными абатментами «Safe on Four». Он используется для	

		лабораторного изготовления мостов с винтовым креплением или восстановления при помощи индивидуальной балки из сплава благородных металлов. SIC Crown Base изготовлен из титана марки 5 и после фиксации на абатмент привинчивается с помощью балочного и мостового абатмента «Safe on Four» или стандартных абатментов с использованием фиксационного винта SIC. Индивидуальные каркасы мостовидных протезов для окклюзионного завинчивания могут моделироваться с использованием основы «TITANIUM» Crown Base и приклеены или цементированы без приложения давления на основной модели или интраорально. Индивидуальные балки изготавливаются аналогичным образом. Фиксационный винт SIC «Safe on Four» для «Safe on Four» затягивается с помощью отвертки SIC HEX 1.2 мм и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
1.52	Абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", residue-free burn-out (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")	SIC Crown Base «Safe on Four» подходит как «модельная» основа для изготовления модели металлического каркаса в сочетании с балочными или мостовыми абатментами, соответственно, стандартными абатментами «Safe on Four». Он используется для лабораторного изготовления мостов с винтовым креплением или восстановления при помощи индивидуальной балки. Crown Base «Safe on Four»	

		может использоваться для контурирования индивидуальных мостовых каркасов, предназначенных для окклюзионного винтового крепления, которые могут быть цементированы интраорально или на основную модель с пассивной посадкой. Индивидуальные балочные конструкции можно изготовить аналогичным образом. Фиксационный винт SIC «Safe on Four» затягивается с помощью отвертки SIC HEX 1,2 мм и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
1.53	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	SIC «Safe on Four» представляют собой усовершенствованные «балочные и мостовые абатменты». В «Safe on Four» стандартные угловые абатменты «Safe on Four» напрямую фиксируются к соответствующему имплантату при помощи винта. Таким образом, создается фиксированная трансгингивальная платформа, на которой в дальнейшем проводятся все работы по протезированию и технические работы. Система предназначена для фиксированного или съемного моста или полных восстановлений при условии, что дистальные имплантаты могут иметь максимальный угол имплантации 30°. Максимальная доступность костной ткани используется дистально путем смещения наиболее дистально расположенного углового имплантата. При разработке особое значение придавалось	
1.54	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).		
1.55	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)		
1.56	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).		

		обеспечению максимальной возможной стабильности отдельных компонентов. Прямые балочные и мостовые абатменты состоят из двухкомпонентной конструкции, которая включает абатмент с шестигранником и установочный винт «Safe on Four», который благодаря длинному винтовому стержню обеспечивает максимальную постоянную несущую способность. Универсальные фиксационные винты «Safe on Four» снабжены усиленной резьбой.	
1.57	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM grey, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Показания к применению SIC Milling blank CAD / CAM такие же, как и для SIC Bonding Base CAD / CAM, с той разницей, что Milling blank индивидуализируется с помощью технологии CAD / CAM. Совместимы с системой имплантатов SICvantage. Усилие затяжки 20 Нсм.	
1.58	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM blue, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.59	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM red, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.60	Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM, Ø 4.2 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Показания к применению SIC Milling blank CAD / CAM такие же, как и для SIC Bonding Base CAD / CAM, с той разницей, что Milling blank индивидуализируется с помощью технологии CAD / CAM. Совместимы с системой имплантатов SICmax и SICase. Усилие затяжки 20 Нсм.	
1.61	Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM, Ø 3.3 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.62	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 1.0 mm.	SICvantage LocFix, предназначены для фиксации частичных и полных протезов, являются наиболее широко используемыми по всему миру фиксаторами	
1.63	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 2.0 mm		

1.64	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 3.0 mm	имплантатов. Область применения LocFix включает фиксацию частичных и полных протезов не менее чем на 4 имплантатах. Решающими факторами при планировании использования этих абатментов являются минимальная общая высота по вертикали, уникальный принцип двойной фиксации, подтвержденная долговременная стабильность и удобное, интуитивное позиционирование. Конструкция LocFix позволяет использовать их в случаях, когда у имплантатов сильно расходятся оси - до 40° - и очень ограниченное окклюзионное пространство. Длительный срок службы, возможность легкой замены в присутствии пациента и диапазон различных нейлоновых вставок (шесть различных усилий разъединения от 0,6 до 1,9 кг) обеспечивают возможность регулирования фиксации в соответствии с показаниями и несложное обслуживание. SIC LocFix крепятся с помощью инструмента SIC LocFix Insertion Tool с помощью отвертки SIC Srewdriver HEX 1,2 мм. Усилие затяжки 20 Нсм.	
1.65	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 4.0 mm		
1.66	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 5.0 mm		
1.67	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 6.0 mm		
1.68	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 1.0 mm		
1.69	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 2.0 mm		
1.70	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 3.0 mm.		
1.71	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 4.0 mm.		
1.72	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 5.0 mm.		
1.73	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 6.0 mm.		
1.74	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)		

1.75	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	винтовых коронок и мостов. Конструкция абатмента имеет форму подготовленного зуба и обеспечивает легкое и недорогое изготовление вторичных частей с минимальным снятием материала - аналогично протезному лечению натурального зуба – вне зависимости от типа восстановления отдельной коронкой или мостом с длинным пролетом.	
1.76	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	Абатмент, связанный с имплантатом, имеет коническую соединительную геометрию. Абатмент имеет выпуклый / вогнутый десенный профиль от уровня имплантата до высоты десны (GH) в передней (узкой) и соответственно задней (широкой) конструкции.	
1.77	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	Функциональная секция для установки коронки имеет плоскую поверхность, которая предотвращает вращение. Встроенная поперечная резьба обеспечивает подготовку горизонтального резьбового крепления коронки с абатментом. Абатменты можно индивидуализировать путем обрезки и полировки. Стандартный абатмент фиксируется в положении на имплантате при помощи стандартного фиксационного винта (прямого и изогнутого 15°) и соответственно SIC винта, короткого (изогнутого 25°). Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
1.78	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gürel Ø 3.3 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw).	Абатмент SIC P2F Dr. Galip Gürel позволяет производить незамедлительное восстановление,	

1.79	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	удовлетворяющее высочайшим эстетическим требованиям и обеспечивает максимальную поддержку мягких тканей. Благодаря субтрактивному стачиванию или шлифованию, оператор получает возможности эффективным образом провести оптимальное временное восстановление, по существу аналогично подготовке зуба. Абатмент защелкивается на фиксирующее основание SIC CEREC без цемента, т. е. механическое удержание реализовано без фиксации с использованием цемента. Коронка цементируется непосредственно на основание абатмента P2F для окончательного протезирования. Кроме того, абатмент P2F можно отсоединить от фиксирующего основания SIC для осуществления окончательного восстановления с применением технологии CAD / CAM (Sirona inLab) на основе существующего титанового основания. Круглая конструкция обеспечивает очень экономичную возможность восстановления. Треугольная конструкция идеально подходит для передних восстановлений. Овальная версия идеально подходит для премолярных восстановлений. Абатмент P2F удерживается на имплантате с использованием стандартного фиксиционного винта. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом	
1.80	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.81	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.82	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.83	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.84	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.85	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.86	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.87	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.		
1.88	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
1.89	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		

		20 Нсм. Еще одним вариантом применения абатмента SIC P2F является погружное заживление без немедленного восстановления. В этом случае требуемый профиль выступления изготавливается в присутствии пациента, абатмент укорачивается и устанавливается на место.	
2.	Титановое основание для дентального имплантата SIC:		
2.1	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановое основание SIC Bonding Base CAD / CAM, прямое, подходит для изготовления спроектированных и изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления отдельных зубов с использованием имплантатов SIC на основе системы Sirona CEREC.	
2.2	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
2.3	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
2.4	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановое основание имеет прецизионный шестигранник SIC в месте соединения имплантат-абатмент для обеспечения получения слепка и безопасности вращения. Функциональная часть протеза соответствует Sirona Tibase размера S, для соответствующих блоков стачивания CEREC размера S. Титановое основание и имплантируемые абатменты фиксируются с использованием стандартных методов. Рабочий процесс обеспечивается Sirona CEREC. Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи стандартного фиксационного винта. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с	

		крутящим моментом 20 Нсм.	
2.5	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.7 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановые основания SICvantage Bonding Bases CAD / CAM подходят для изготовления спроектированных и	
2.6	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления отдельных зубов, мостовидных и балочных	
2.7	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	абатментов на имплантатах SICvantage, которые адгезивно крепятся на титановое основание с использованием стандартных методов. Функциональная секция протеза включает основание высотой 1,0 мм, которое соответствует диаметру имплантата, и слегка конической секции фиксации, которая имеет плоскую часть, обеспечивающую защиту от вращения. Секция основания, прилегающая к имплантату, имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки - SICvantage® Swiss Cross. Конус Морзе с углом конуса 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Адгезионное соединение может быть выполнено с	

		использованием обычных методов «холодной адгезии» и стандартных, подтвержденных адгезивов, либо с помощью технологии «термоплавкого адгезива» с использованием стеклянного припоя (например, Tizion Hot Bond). Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
2.8	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, CEREC (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановые основания SICvantage Bonding Bases CAD / CAM подходит для изготовления спроектированных и изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления отдельных зубов с использованием имплантатов SIC на основе системы Sirona CEREC. Функциональная часть протеза соответствует Sirona Tibase размера S, для соответствующих блоков стачивания CEREC размера S. Титановое основание и имплантируемые абатменты фиксируются с использованием стандартных методов. Секция основания, прилегающая к имплантату, имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки - SICvantage® Swiss Cross. Конус Морзе с общим углом конуса 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой	

		конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Рабочий процесс обеспечивается Sirona CEREC. Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
2.9	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановые основания SICvantage Bonding Bases CAD / CAM подходят для изготовления спроектированных и изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления отдельных зубов, мостовидных и балочных абатментов на имплантатах SICvantage, которые адгезивно крепятся на титановое основание с использованием стандартных методов. Функциональная секция протеза включает основание высотой 1,0 мм, которое соответствует диаметру имплантата, и слегка конической секции фиксации, которая имеет плоскую часть, обеспечивающую защиту от вращения. Секция основания, прилегающая к имплантату, имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки -	
2.10	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
2.11	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)		

		SICvantage Swiss Cross. Конус Морзе с углом конуса 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Адгезионное соединение может быть выполнено с использованием обычных методов «холодной адгезии» и стандартных, подтвержденных адгезивов, либо с помощью технологии «термоплавкого адгезива» с использованием стеклянного припоя (например, Tizion Hot Bond). Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
2.12	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановые основания SICvantage Bonding Base CAD / CAM прямой, CEREC подходят для изготовления спроектированных и	
2.13	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления отдельных зубов с использованием имплантатов SIC на основе системы Sirona CEREC.	
		Функциональная часть	

		протеза соответствует Sirona Tibase размера S, для соответствующих блоков стачивания CEREC размера S. Титановое основание и имплантируемые абатменты фиксируются с использованием стандартных методов. Секция основания, прилегающая к имплантату, имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки - SICvantage® Swiss Cross. Конус Морзе с углом конуса 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Рабочий процесс обеспечивается Sirona CEREC. Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
2.14	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановые основания SICvantage Bonding Bases CAD / CAM подходят для изготовления	

2.15	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw)	спроектированных и изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления	
2.16	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	отдельных зубов, мостовидных и балочных абатментов на имплантатах SICvantage, которые адгезивно крепятся на титановое основание с использованием стандартных методов. Функциональная секция протеза включает основание высотой 1,0 мм, которое соответствует диаметру имплантата, и слегка конической секции фиксации, которая имеет плоскую часть, обеспечивающую защиту от вращения. Секция основания, прилегающая к имплантату, имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки - SICvantage® Swiss Cross. Конус Морзе с общим углом конуса 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Адгезионное соединение может быть выполнено с использованием обычных методов «холодной адгезии» и стандартных, подтвержденных адгезивов,	





		либо с помощью технологии «термоплавкого адгезива» с использованием стеклянного припоя (например, Tizion Hot Bond). Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
2.17	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановые основания SICvantage Bonding Base CAD / CAM прямой, CEREC подходят для изготовления спроектированных и	
2.18	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) .	изготовленных посредством CAD / CAM имплантируемых абатментов и восстановления отдельных зубов с использованием имплантатов SIC на основе системы Sirona CEREC. Функциональная часть протеза соответствует Sirona Tibase размера S, для соответствующих блоков стачивания CEREC размера S. Титановое основание и имплантируемые абатменты фиксируются с использованием стандартных методов. Секция основания, прилегающая к имплантату, имеет коническую соединительную геометрию и 4 направляющие канавки - SICvantage® Swiss Cross. Конус Морзе с углом конуса 2,8° обеспечивает между имплантатом и абатментом надежную самофиксацию, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс	


		сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором. Рабочий процесс обеспечивается Sirona CEREC. Фиксирующее основание удерживается в положении на имплантате при помощи фиксационного винта SICvantage. Винт затягивается с помощью отвертки SIC и реверсивного ключа с крутящим моментом 20 Нсм.	
3.	Скан-адаптеры SIC:		
3.1	Скан-адаптер SIC Scan Adapter Ø 3.3/4.2 mm, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Скан-адаптер, для цифрового моделирования CAD / CAM точечных абатментов. - Скан-адаптер SIC Scan Adapter Ø 3.3/4.2 mm, скан-	
3.2	Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter grey, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	адаптер SICvantage Scan Adapter grey, скан-адаптер SICvantage Scan Adapter blue и	
3.3	Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter blue, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	скан-адаптер SICvantage Scan Adapter red совместим с имплантатами SICvantage	
3.4	Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter red, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw) .	Скан-адаптер SIC Scan Post Ø 3.3mm, CEREC совместим с имплантатами SICace и SICmax.	
3.5	Скан-адаптер SIC Scan Post Ø 3.3mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)		
4.	Формирователи для дентального имплантата марки SIC:		
4.1	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 1.0 mm	Формирователь SICvantage gingiva shaper используется для формирования десны после открытия имплантата или, в качестве альтернативы, с трансгингивальным заживлением. Имплантат	
4.2	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 2.0 mm		


4.3	Формирователь Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 3.0 mm	наращивается до «наддесневого уровня» в случае трансгингивального заживления. Формирователи десны имеют две разных формы исполнения: вогнутые передние и вогнутые задние, в целях соответствия самым разнообразным показаниям. После повторного открытия возможно наилучшим способом обработать случаи от узкой щели в отдельном зубе до широко простирающейся молярной ситуации со слизистой оболочкой. Вогнутый передний контур предназначен для создания расширенного профиля выступления в эстетической области. Вогнутый задний контур следует использовать для создания расширенного профиля выступления в задней области. Формирователь SICvantage Gingiva Shaper фиксируется с помощью отвертки SIC «вручную» или при помощи реверсивного ключа с крутящим моментом 5 Нсм. Формирователи Gingiva shapers являются изделиями одноразового применения.	
4.4	Формирователь Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 4.0 mm		
4.5	Формирователь Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 5.0 mm		
4.6	Формирователь Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 1.0 mm		
4.7	Формирователь Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 2.0 mm		
4.8	Формирователь Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 3.0 mm		
4.9	Формирователь Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 4.0 mm		
4.10	Формирователь Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 5.0 mm		
4.11	Формирователь Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 7.0 mm		
4.12	Формирователь Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 1.5 mm		
4.13	Формирователь Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 3.0 mm		
4.14	Формирователь Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 5.0 mm		
4.15	Формирователь Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 7.0 mm		

4.16	Формирователь TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, blue	SICvantage	представляет собой инновационный продукт, обеспечивающий эффективность процесса супрагингивального заживления. Непосредственно после установки имплантата он прищелкивается на установочный штифт. Необходимо следить за тем, чтобы на имплантат отсутствовала функциональная нагрузка.	
4.17	Формирователь Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 1.0 mm	SICvantage	Формирователь gingiva shaper используется для формирования десны после открытия имплантата или, в качестве альтернативы, с трансгингивальным заживлением. Имплантат наращивается до «наддесневого уровня» в случае трансгингивального заживления. Формирователи десны имеют две разных формы исполнения: вогнутые передние и вогнутые задние, в целях соответствия самым разнообразным показаниям. После повторного открытия возможно наилучшим способом обработать случаи от узкой щели в отдельном зубе до широко простирающейся молярной ситуации со слизистой оболочкой. Вогнутый передний контур предназначен для создания расширенного профиля выступания в эстетической области. Вогнутый задний контур следует использовать для создания расширенного профиля выступания в задней области.	
4.18	Формирователь Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 2.0 mm	SICvantage		
4.19	Формирователь Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 3.0 mm	SICvantage		
4.20	Формирователь Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 4.0 mm	SICvantage		
4.21	Формирователь Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 5.0 mm	SICvantage		
4.22	Формирователь Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 7.0 mm	SICvantage		
4.23	Формирователь Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 1.5 mm	SICvantage		
4.24	Формирователь Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 3.0 mm	SICvantage		
4.25	Формирователь Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 5.0 mm	SICvantage		
4.26	Формирователь Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 7.0 mm	SICvantage		

		Формирователь SICvantage Gingiva Shaper фиксируется с помощью отвертки SIC «вручную» или при помощи реверсивного ключа с крутящим моментом 5 Нсм. Формирователи Gingiva shapers являются изделиями одноразового применения.	
4.27	Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, red	SICvantage TempCap представляет собой инновационный продукт, обеспечивающий эффективность процесса супрагингивального заживления. Непосредственно после установки имплантата он прищелкивается на установочный штифт. Необходимо следить за тем, чтобы на имплантат отсутствовала функциональная нагрузка.	
4.28	Формирователь SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click	Используются с серией SIC «Safe on Four». Серия показана для фиксированного или съемного моста или полных восстановлений при условии, что дистальные имплантаты могут иметь максимальный угол имплантации 30°. Усилие затяжки 20 Нсм.	
4.29	Формирователь SIC Gingiva Shaper Ø 3.3 mm, concave, anterior, GH 7.0 mm	Используется для формирования десны после открытия имплантата или, в качестве альтернативы, с трансгингивальным	
4.30	Формирователь SIC Gingiva Shaper Ø 3.3 mm, concave, posterior, GH 7.0 mm	Цилиндрический контур должен быть выбран для получения тонкодисперсного профиля, особенно с узкими пространствами или имплантатами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Усилие затяжки 5 Нсм.	
5.	Трансферы для дентального имплантата марки SIC:		

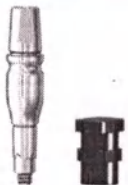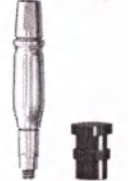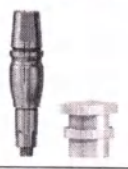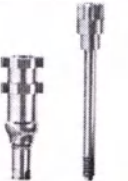5.1	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click)	Репозиционный трансфер SICvantage используется при применении «метода закрытой ложки» для снятия слепков. Трансфер переносит абсолютное и относительное положение имплантата и положение SICvantage® Swiss Cross на основную модель. В целях соответствия любым приложениям, трансфер изготавливается в укороченной и удлиненной версиях.	
5.2	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click)	Репозиционный трансфер снабжен SICvantage® Swiss Cross, осевой позиционирующей секцией без холодной сварки, слегка вогнутым десенным выступом и конической головкой с горизонтальными удерживающими канавками и двумя плоскими поверхностями. Колпачок устанавливается на головку трансфера после фиксации абатмента в необходимом положении на имплантатах с помощью фиксационного винта SICvantage с крутящим моментом 5 Нсм. Репозиционный трансфер, остающийся на имплантате после снятия слепка, удаляется стоматологом, а затем техником перед изготовлением модели. Абатмент следует выбирать в соответствии с цветовым кодированием протеза.	
5.3	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)		
5.4	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)		
5.5	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)		
5.6	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)		
5.7	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	Трансфер SICvantage Transfer для «метода открытой ложки» используется при снятии слепков с использованием индивидуализированной ложки для слепка. Трансфер переносит абсолютное и относительное положение имплантата, а также	
5.8	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)		

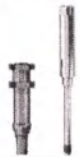5.9	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)	положение SICvantage® Swiss Cross в имплантате, на лабораторную рабочую модель. Для зависимых от ситуации приложений, трансфер доступен в укороченной и удлиненной версиях. Ложку необходимо перфорировать в области имплантата с целью облегчить установку фиксационного винта трансфера. Стандартный трансфер имеет осевой укороченный SICvantage® Swiss Cross и осевую позиционирующую часть без холодной сварки, что позволяет получать точные слепки без искажений и стресса даже при расходящихся имплантатах. Трансфер для мостовидных протезов снабжен коротким усеченным конусом в месте соединения имплантата и абатмента в целях точного аксиального позиционирования без индексации и безопасности вращения. Область десенного выступа имеет слегка вогнутую конструкцию, а головная часть снабжена фиксатором. Трансфер фиксируется в положении на имплантате при помощи фиксационного винта для трансферов.	
5.10	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)		
5.11	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)		
5.12	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)		
5.13	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm);.		
5.14	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm) .		
5.15	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)		
5.16	Трансфер SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black	Слепочный трансфер SIC LocFix Impression Post используется непосредственно над абатментом LocFix для снятия слепков. Трансфер состоит из титанового корпуса и нейлоновой вставки, которая обеспечивает трение для надежной фиксации на абатменте LocFix. Трансфер присоединяется к абатменту LocFix простым размещением	

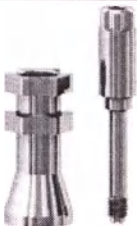
		на абатменте. Секция с фиксирующими надрезами обеспечивает фиксацию слепочного трансфера LocFix в слепке после снятия слепка (стоматологическая или индивидуальная ложка).	
5.17	Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four", Open Tray Technique (incl. SIC Fixation Screw 16.0 mm)	Трансфер SIC «Safe on Four» Open Tray Technique используется для снятия слепков с использованием метода «открытой ложки». Трансфер переносит абсолютное и относительное положение имплантата и положение абатмента, используемого в имплантате, на основную модель. Ложку необходимо перфорировать в области имплантата с целью облегчить установку фиксационного винта трансфера. Абатмент имеет универсальную коническую посадку всех абатментов SIC «Safe on Four» и коническую зону трансфера, а также фиксирующий контур в области головки. Трансфер фиксируется в положении на балочном и мостовом абатменте «Safe on Four» и стандартном абатменте с помощью фиксационного винта 16 мм. Стандартный абатмент «Safe on Four», метод открытой ложки, остается в ложке после снятия слепка. Для изготовления модели, лабораторный имплантат устанавливается техником с последующим изготовлением модели. Трансфер «Safe on Four» затягивается вручную с крутящим моментом 5-7 Нсм при помощи отвертки HEX 1.2 мм SIC.	

5.18	Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click	Трансфер SIC Transfer Abutment «Safe on Four», репозиционный, используется при снятии слепков методом закрытой ложки. Трансфер переносит абсолютное и относительное положение имплантата и положение соответствующего абатмента в имплантате на основную модель. Для трансферов характерна универсальная коническая посадка всех SIC «Safe on Four», коническая головка с горизонтальной канавкой для фиксации и две плоские поверхности. Колпачок трансфера устанавливается на указанную головку после фиксации абатмента в нужном положении с крутящим моментом 4-5 Нсм. Винт интегрирован в трансфер. Репозиционный трансфер «Safe on Four», остающийся на имплантате после снятия слепка, удаляется стоматологом, а затем переносится техником перед изготовлением модели вместе с лабораторным имплантатом в колпачке трансфера, который остается в слепке.	
6.	Аналоги имплантатов марки SIC:		
6.1	Аналог имплантата SICvantage Lab Implant grey	SICvantage Lab Implant является аналогом имплантата. Внутренняя геометрия лабораторного имплантата соответствует внутренней геометрии SICvantage и гарантирует точный перенос между моделью и ртом. Для удобства обращения	
6.2	Аналог имплантата SICvantage Lab Implant blue		

6.3	Аналог имплантата SICvantage Lab Implant red	конус Морзе устанавливается без трения. Погружение абатмента передается точно в определенном вертикальном положении. Это упрощает совершение всех стоматологических технических процедур и одновременно сохраняет соответствие имплантата и абатмента.	
6.4	Аналог имплантата SIC LocFix Lab Implant	Аналог имплантата SIC LocFix Lab Implant используется для изготовления рабочей модели с воссозданием фиксированного в имплантате протеза. Он имеет форму имплантата, включая абатмент LocFix. Лабораторный имплантат состоит из титана и имеет в функциональном разрезе ту же геометрию, что и абатмент LocFix. Благодаря силе фиксации лабораторный имплантат надежно фиксируется в рабочей модели. Он предназначен для одноразового использования. Он также используется для модели с перебазировкой.	
7.	Винт абатмента для дентального имплантата марки SIC:		
7.1	Винт абатмента SICvantage Fixation Screw for prosthetics in grey	Данный фиксационный винт SICvantage используется для серых протезов SICvantage. Фиксационный винт имеет винтовую резьбу диаметром 1,4 мм и выполнен из титана. В головке винта находится внутренний шестигранник шириной 1,2 мм - под отвертку.	
7.2	Винт абатмента SICvantage Fixation Screw	Фиксационный винт SICvantage используется для синих и голубых протезов SICvantage.	

7.3	Винт абатмента SICvantage Fixation Screw, short	Фиксационный винт имеет винтовую резьбу диаметром 1,6 мм и выполнен из титана. В головке винта находится внутренний шестигранник шириной 1,2 мм - под отвертку.	
8.	Колпачки для абатментов и трансферов марки SIC:		
8.1	Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, red	Слепочные колпачки SICvantage позволяют снимать точные слепки с помощью стандартного абатмента, который можно использовать на месте. Преимущества данной технологии заключаются в экономичности и точности, поскольку отсутствует необходимость в дополнительном слепочном штифте, а индивидуальное соответствие интерфейса включено в слепок. Рекомендуется следующий рабочий процесс: ❖ Удаление формирователя десны. ❖ Установка стандартного абатмента с крутящим моментом 20 Нсм. ❖ Позиционирование слепочного колпачка и перемещение посредством закрытой ложки. ❖ Удаление стандартного абатмента с помощью экстрактора и перемещение вместе с лабораторным аналогом. ❖ Повторная установка формирователя десны. ❖ Вставка конечной коронки.	
8.2	Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, blue .		
8.3	Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, grey .		

8.4	Колпачок SIC LocFix Denture Cap incl. Processing Male, black .	Колпачок SIC LocFix Denture Cap поставляется с предварительно установленной черной вставкой, которая функционирует как прокладка для различных матриц LocFix. Черная полимеризационная матрица используется только во время полимеризации в протезе и после изготовления фиксируемого протеза LocFix с последующей заменой на требуемую фиксирующую матрицу.	
8.5	Колпачок SIC Transfer Caps with Click, 5 pieces	Колпачки SIC Transfer Caps with Click показаны для получения слепков с использованием «метода закрытой ложки». Тем самым гарантируется надежное смещение трансфера стоматологом и точный перенос положения имплантата в лабораторную рабочую модель.	
8.6	Колпачок SIC Transfer Caps with Click, grey, 5 pieces	Колпачки SIC Transfer Caps для «Репозиционирования» трансферов являются фиксирующими, вращательно защищенными деталями, которые остаются в слепке. Перед снятием слепка колпачки устанавливаются на соответствующий абатмент. Колпачки трансферов являются одноразовыми продуктами.	
9.	Матрицы для абатментов SIC:		
9.1	Матрица к абатменту SIC LocFix Processing Male, 4 pieces, black	Черная полимеризационная матрица используется исключительно во время полимеризации в протезе и впоследствии заменяется необходимой удерживающей матрицей.	

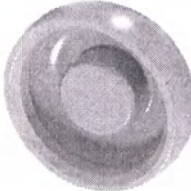9.2	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, clear, 1.9 kg retention force	Удерживающая матрица SIC LocFix, прозрачная, изготовлена из нейлона и имеет удерживающее усилие 1,9 кг. Матрица имеет двойной принцип удержания, который захватывает головку абатмента LocFix как с внутренней, так и с внешней стороны. Удерживающая матрица устанавливается в корпус матрицы с помощью прибора LocFix, к примеру, после износа, повреждения или для регулировки усилия разъединения.	
9.3	Матрица к абатменту SIC LocFix 8. Изолирующее кольцо абатмента SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces – Replacement Male, 4 pieces, pink, 1.1 kg retention force	Удерживающая матрица SIC LocFix, розовая, изготовлена из нейлона и имеет удерживающее усилие 1,1 кг. Матрица имеет двойной принцип удержания, который захватывает головку абатмента LocFix как с внутренней, так и с внешней стороны. Удерживающая матрица устанавливается в корпус матрицы с помощью прибора LocFix, к примеру, после износа, повреждения или для регулировки усилия разъединения.	
9.4	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, blue, 0.7 kg retention force	Удерживающая матрица SIC LocFix, синяя, изготовлена из нейлона и имеет удерживающее усилие 0,7 кг. Матрица имеет двойной принцип удержания, который захватывает головку абатмента LocFix как с внутренней, так и с внешней стороны. Удерживающая матрица устанавливается в корпус матрицы с помощью прибора LocFix, к примеру, после износа, повреждения или для регулировки усилия разъединения.	

9.5	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, green, 1.8 kg retention force	Удерживающая матрица SIC LocFix, зеленая, изготовлена из нейлона и имеет удерживающую силу 1,8 кг. Принцип удержания обеспечивает захват головки абатмента LocFix с внешней стороны. Поэтому зеленая удерживающая матрица LocFix подходит для использования с непараллельными имплантатами от 10° до 20°. Удерживающая матрица устанавливается в корпус матрицы с помощью прибора LocFix, к примеру, после износа, повреждения или для регулировки усилия разъединения.	
9.6	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, orange, 1.1 kg retention force	Удерживающая матрица SIC LocFix, оранжевая, изготовлена из нейлона и имеет удерживающую силу 1,1 кг. Принцип удержания обеспечивает захват головки абатмента LocFix с внешней стороны. Поэтому оранжевая удерживающая матрица LocFix подходит для использования с непараллельными имплантатами от 10° до 20°. Удерживающая матрица устанавливается в корпус матрицы с помощью прибора LocFix, к примеру, после износа, повреждения или для регулировки усилия разъединения.	
9.7	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, red, 0.6 kg retention force	Удерживающая матрица SIC LocFix, красная, изготовлена из нейлона и имеет удерживающую силу 0,6 кг. Принцип удержания обеспечивает захват головки абатмента LocFix с внешней стороны. Поэтому красная удерживающая матрица LocFix подходит для	

		использования с непараллельными имплантатами от 10° до 20°. Удерживающая матрица устанавливается в корпус матрицы с помощью прибора LocFix, к примеру, после износа, повреждения или для регулировки усилия разъединения.	
10.	Принадлежности:		
10.1	Позиционер абатмента SICvantage Positioning Aid 16° and 30° for SICvantage "Safe on Four"	Используется совместно с серией SIC «Safe on Four».	
10.2	10.2 Кольцо изоляционное SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces	Используется в качестве изоляции между десневым краем и абатментом, чтобы предотвратить протекание пластмассы в момент полимеризации протеза. После полимеризации протеза изоляционное кольцо удалется.	

Размерные характеристики медицинских изделий приведены в Приложении А.

Масса медицинских изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование	Масса, г (допуск ±10%)
Абатменты для дентального имплантата SIC:		
1	Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, blue	0,281
2	Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, red	0,280
3	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap)	0,306
4	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	0,278

5	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	0,304
6	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	0,354
7	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	0,335
8	Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	0,348
9	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,374
10	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,416
11	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,446
12	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,551
13	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,425
14	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,506
15	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,681
16	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,462
17	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,515

18	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,618
19	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,491
20	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,578
21	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,756
22	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,418
23	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,479
24	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,554
25	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,620
26	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,671
27	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,718
28	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,620
29	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,743
30	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,994
31	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap);.	0,645
32	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,618
33	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,795
34	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,700
35	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,703

36	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	1,077
37	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,556
38	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	0,653
39	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 1.5 mm.	0,233
40	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 3.0 mm.	0,921
41	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 1.5 mm.	0,272
42	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 3.0 mm.	0,338
43	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,261
44	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,331
45	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,278
46	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,345
47	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,284
48	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,365
49	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,300
50	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	0,388
51	Абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", Titanium (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")	0,193
52	Абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", residue-free burn-out (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")	0,095
53	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	0,245
54	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	0,283

55	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	0,280
56	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	0,430
57	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM grey, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	8,619
58	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM blue, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,626
59	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM red, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,642
60	1.61 Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM , Ø 4.2 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,804
61	1.62 Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM , Ø 3.3 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,873
62	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 1.0 mm.	0,136
63	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 2.0 mm	0,185
64	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 3.0 mm	0,230
65	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 4.0 mm	0,281
66	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 5.0 mm	0,303
67	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 6.0 mm	0,404
68	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 1.0 mm	0,166
69	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 2.0 mm	0,210
70	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 3.0 mm.	0,258
71	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 4.0 mm.	0,308
72	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 5.0 mm.	0,356
73	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 6.0 mm.	0,406
74	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	0,458
75	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC	0,594

35	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	0,280
36	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	0,430
37	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM grey, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	8,619
38	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM blue, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,626
39	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM red, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,642
40	1.61 Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM , Ø 4.2 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,804
41	1.62 Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM , Ø 3.3 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	8,873
42	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 1.0 mm.	0,136
43	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 2.0 mm	0,185
44	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 3.0 mm	0,230
45	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 4.0 mm	0,281
46	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 5.0 mm	0,303
47	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 6.0 mm	0,404
48	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 1.0 mm	0,166
49	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 2.0 mm	0,210
50	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 3.0 mm.	0,258
51	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 4.0 mm.	0,308
52	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 5.0 mm.	0,356
53	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 6.0 mm.	0,406
54	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	0,458
55	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC	0,594

	Fixation Screw, short)	
65	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	0,298
67	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	0,376
68	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw).	0,312
69	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,374
70	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,318
71	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,353
72	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,311
73	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,360
74	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,530
75	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,630
76	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,530
77	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1шт.	0,630
78	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,530
79	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,630
Титановое основание для дентального имплантата SIC:		
80	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,178
81	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,184
82	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,268
83	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,322

Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.7 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	0,147
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	0,124
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	0,168
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, CEREC (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	0,183
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,166
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,137
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,189
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,188
2.13 Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,249
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,208
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,166
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,246
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,219
Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,301
Скан-адаптеры SIC:	
Скан-адаптер SIC Scan Adapter Ø 3.3/4.2 mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	0,849
Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter grey, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	0,543
Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter blue, for digital modelling of CAD/CAM	0,762

Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	
Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter red, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw).	0,784
Скан-адаптер SIC Scan Post Ø 3.3mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw).	0,545
Формирователи для дентального имплантата марки SIC:	
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 1.0 mm	0,089
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 2.0 mm	0,120
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 3.0 mm	0,183
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 4.0 mm	0,211
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 5.0 mm	0,253
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 1.0 mm	0,120
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 2.0 mm	0,160
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 3.0 mm	0,254
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 4.0 mm	0,278
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 5.0 mm	0,350
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 7.0 mm	0,460
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 1.5 mm	0,165
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 3.0 mm	0,270
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 5.0 mm	0,465
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 7.0 mm	0,657
Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, blue	0,035
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 1.0 mm	0,158
Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 2.0 mm	0,217

9	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 3.0 mm	0,353
10	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 4.0 mm	0,378
11	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 5.0 mm	0,501
12	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 7.0 mm	0,672
13	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 1.5 mm	0,225
14	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 3.0 mm	0,365
15	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 5.0 mm	0,641
16	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 7.0 mm	0,913
17	Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, red	0,037
18	Формирователь SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click	0,068
19	Формирователь SIC Gingiva Shaper Ø 3.3 mm, concave, anterior, GH 7.0 mm	0,472
20	Формирователь SIC Gingiva Shaper Ø 3.3 mm, concave, posterior, GH 7.0 mm	0,680

Трансферы для дентального имплантата марки SIC:

21	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click)	0,302
22	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click)	0,515
23	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	0,465
24	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	0,594
25	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	0,449
26	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	0,702

Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	0,559
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	0,585
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)	0,752
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	0,556
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)	0,722
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	0,616
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm);.	0,796
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm) .	0,608
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)	0,782
Трансфер SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black	0,190
Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four", Open Tray Technique (incl. SIC Fixation Screw 16.0 mm)	0,570
Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click	0,106
Аналоги имплантатов марки SIC:	
Аналог имплантата SICvantage Lab Implant grey	0,218
Аналог имплантата SICvantage Lab Implant blue	0,334
Аналог имплантата SICvantage Lab Implant red	0,437
Аналог имплантата SIC LocFix Lab Implant	0,451
Винт абатмента для дентального имплантата марки SIC:	
Винт абатмента SICvantage Fixation Screw for prosthetics in grey	0,065

Винт абатмента SICvantage Fixation Screw	0,063
Винт абатмента SICvantage Fixation Screw, short	0,054
Колпачки для абатментов и трансферов марки SIC:	
Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, red	0,082
Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, blue	0,100
Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, grey	0,156
Колпачок SIC LocFix Denture Cap incl. Processing Male, black	0,088
Колпачок SIC Transfer Caps with Click, 5 pieces	0,460
Колпачок SIC Transfer Caps with Click, grey, 5 pieces	0,215
Матрицы для абатментов SIC:	
Матрица к абатменту SIC LocFix Processing Male, 4 pieces, black	0,052
Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, clear, 1.9 kg retention force	0,060
Матрица к абатменту SIC LocFix 8. Изолирующее кольцо абатмента SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces – Replacement Male, 4 pieces, pink, 1.1 kg retention force	0,060
Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, blue, 0.7 kg retention force	0,052
Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, green, 1.8 kg retention force	0,052
Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, orange, 1.1 kg retention force	0,052
Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, red, 0.6 kg retention force	0,052
Принадлежности:	
1. Позиционер абатмента SICvantage Positioning Aid 16° and 30° for SICvantage "Safe on Four"	1,208
2. Кольцо изоляционное SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces	0,061

9.1. Материалы приведены в таблице 3

Таблица 3

Деталь изделия	Материал, марка
Абатменты для дентального имплантата SIC:	
Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, blue	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
Абатмент SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post, red	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 2.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment grey, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment	Титановый сплав Ti-6Al-4V:

blue, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%,

	Impression Cap).	производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
22	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
23	Абатмент SICvantage Standard Abutment blue, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
24	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
25	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 2.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
26	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
27	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
28	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
29	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
30	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, straight, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
31	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap);.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия

32	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
33	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
34	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 1.5 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
35	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
36	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, posterior, 15° angle, GH 5.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
37	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
38	Абатмент SICvantage Standard Abutment red, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl.SIC Standard Fixation Screw and Impression Cap).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
39	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 1.5 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
40	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" blue, straight, GH 3.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
41	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 1.5 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
42	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four" red, straight, GH 3.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2

		0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
43	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” blue, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
44	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” blue, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
45	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” blue, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
46	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” blue, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
47	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” red, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
48	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” red, 16° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
49	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” red, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
50	Абатмент SICvantage Multi-Unit Abutment “Safe on Four” red, 30° angle, GH 3.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
51	Абатмент SIC Crown Base “Safe on Four”, Titanium (incl. SIC Fixation Screw “Safe on Four”)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
52	Абатмент SIC Crown Base “Safe on Four”, residue-free burn-out (incl. SIC Fixation Screw “Safe on Four”)	Полимер PMMA (Acryl XT Rundstab transparent), производства «КТК Kunststofftechnik Vertriebs GmbH», Германия.
53	Абатмент SIC Standard Abutment “Safe on	Титановый сплав Ti-6Al-4V:

	Four" Ø 3.3 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
54	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 3.3 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
55	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 16° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
56	Абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four" Ø 4.2 mm, 30° angle, GH 1.5 mm (incl. SIC Fixation Screw, short).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
57	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM grey, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
58	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM blue, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
59	Абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM red, M-Line, GH 0.5 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
60	Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM, Ø 4.2 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
61	Абатмент SIC Milling Blank CAD/CAM, Ø 3.3 mm, M-Line, GH 0.3 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
62	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 1.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
63	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 2.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%,

		производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
64	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 3.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
65	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 4.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
66	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 5.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
67	Абатмент SICvantage LocFix Attachment blue, GH 6.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
68	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 1.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%
69	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 2.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
70	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 3.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
71	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 4.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
72	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 5.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
73	Абатмент SICvantage LocFix Attachment red, GH 6.0 mm.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
74	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2

	SIC Fixation Screw, short)	0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
75	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
76	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
77	Абатмент SIC Standard Abutment Ø 3.3 mm, anterior, 25° angle, GH 3.0 mm (incl. SIC Fixation Screw, short)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
78	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw).	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
79	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
80	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
81	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
82	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
83	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH,

		Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
4	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
5	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, round, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
6	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
7	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, triangle, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw) – 1 шт.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
8	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 2.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
9	Абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm, oval, GH 4.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер VESTAKEEP i4 R, производства Evonic industries AG, Германия
Титановое основание для дентального имплантата SIC:		
1	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
2	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
3	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%,

	Screw)	производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
14	Титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 4.2 mm, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
15	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.7 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
16	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
17	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
18	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM grey, straight, CEREC (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
19	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
20	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
21	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Ти Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
22	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
23	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM blue, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия

14	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.7 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
15	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, GH 0.3 mm, for bridgework (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
16	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, 15° angle, GH 1.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
17	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
18	Титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM red, straight, CEREC, GH 3.0 mm (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Скан-адаптеры SIC:		
1	Скан-адаптер SIC Scan Adapter Ø 3.3 mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Titanium Grade 4, химический состав: N 0,01%; C 0,02%; H 0,002%; Fe 0,07%; O2 0,14%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
2	Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter grey, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SICvantage Fixation Screw for grey)	Титановый сплав Titanium Grade 4, химический состав: N 0,01%; C 0,02%; H 0,002%; Fe 0,07%; O2 0,14%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
3	Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter blue, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Titanium Grade 4, химический состав: N 0,01%; C 0,02%; H 0,002%; Fe 0,07%; O2 0,14%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
4	Скан-адаптер SICvantage Scan Adapter red, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw) .	Титановый сплав Titanium Grade 4, химический состав: N 0,01%; C 0,02%; H 0,002%; Fe 0,07%; O2 0,14%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
5	Скан-адаптер SIC Scan Post Ø 3.3mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments (incl. SIC Standard Fixation Screw)	Титановый сплав Titanium Grade 4, химический состав: N 0,01%; C 0,02%; H 0,002%; Fe 0,07%; O2 0,14%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Формирователи для дентального имплантата марки SIC:		
1	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 1.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия

2	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 2.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
3	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 3.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
4	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 4.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
5	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper grey, anterior, concave, GH 5.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
6	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 1.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
7	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 2.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
8	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 3.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
9	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 4.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
10	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 5.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
11	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, anterior, concave, GH 7.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
12	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 1.5 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2

		0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
13	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 3.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
14	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper blue, posterior, concave, GH 5.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
15	Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, blue	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
16	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 1.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
17	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 2.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
18	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 3.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
19	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 4.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
20	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, anterior, concave, GH 5.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
21	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 1.5 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
22	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 3.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
23	Формирователь SICvantage Gingiva	Титановый сплав Ti-6Al-4V:

	Shaper red, posterior, concave, GH 5.0 mm	N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
24	Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, red	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
25	Формирователь SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
26	Формирователь SICvantage Gingiva Shaper red, posterior, concave, GH 7.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
27	Формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post, red	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
28	Формирователь SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
29	Формирователь SIC Gingiva Shaper Ø 3.3 mm, concave, anterior, GH 7.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
30	Формирователь SIC Gingiva Shaper Ø 3.3 mm, concave, posterior, GH 7.0 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансферы для дентального имплантата марки SIC:		
1	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
2	Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw for grey and Transfer Cap with Click)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
3	Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH,

	Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, short (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, reposition, long (incl. SICvantage Fixation Screw and Transfer Cap with Click)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment blue, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, short (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm);.	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
Трансфер SICvantage Transfer Abutment	Титановый сплав Ti-6Al-4V:

	red, Open Tray Technique, short, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 22.5 mm) .	N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
15	Трансфер SICvantage Transfer Abutment red, Open Tray Technique, long, for bridgework (incl. SIC Fixation Screw 27.5 mm	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
16	Трансфер SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария
17	Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four", Open Tray Technique (incl. SIC Fixation Screw 16.0 mm)	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия
18	Трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
Аналоги имплантатов марки SIC:		
1	Аналог имплантата SICvantage Lab Implant grey	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
2	Аналог имплантата SICvantage Lab Implant blue	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
3	Аналог имплантата SICvantage Lab Implant red	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
4	Аналог имплантата SIC LocFix Lab Implant	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
Винт абатмента для дентального имплантата марки SIC:		
1	Винт абатмента SICvantage Fixation Screw for prosthetics in grey	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
2	Винт абатмента SICvantage Fixation Screw	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
3	Винт абатмента SICvantage Fixation Screw, short	Полимер PEEK_Classix_180, марка VESTAKEEP MC4420R, производства Evonic industries AG, Германия
Колпачки для абатментов и трансферов марки SIC:		
1	Колпачок SICvantage Impression Cap for	ПОМ С MG полиоксиметилен-сополимер,

	Standard Abutments, red	производитель RÖCHLING Group, Германия Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EC-56149 red, производитель RTP France s.n.c., Франция
2	Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, blue	ПОМ С МG полиоксиметилен-сополимер, производитель RÖCHLING Group, Германия Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EC-704157 BLUE, производитель RTP France s.n.c., Франция
3	Колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments, grey	ПОМ С МG полиоксиметилен-сополимер, производитель RÖCHLING Group, Германия Марка красителя RTP 800 S-884322 grey, производитель RTP France s.n.c., Франция
4	Колпачок SIC LocFix Denture Cap incl. Processing Male, black	Титановый сплав Ti-6Al-4V: N 0,05%; C 0,08%; H 0,015%; Fe 0,4%; O2 0,20%, Al 5.5 – 6.5%, V 3.5-4.5%, производитель Zapp Precision Metals GmbH, Германия и полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария Марка красителя RTP 199 X 70815 Black, производитель RTP France s.n.c., Франция
5	Колпачок SIC Transfer Caps with Click, 5 pieces	ПОМ С МG полиоксиметилен-сополимер, производитель RÖCHLING Group, Германия
6	Колпачок SIC Transfer Caps with Click, grey, 5 pieces	ПОМ С МG полиоксиметилен-сополимер, производитель RÖCHLING Group, Германия Марка красителя RTP 800 S-884322 grey, производитель RTP France s.n.c., Франция
Матрицы для абатментов SIC:		
1	Матрица к абатменту SIC LocFix Processing Male, 4 pieces, black	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария Марка красителя RTP 199 X 70815 Black, производитель RTP France s.n.c., Франция
2	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, clear, 1.9 kg retention force	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария
3	Матрица к абатменту SIC LocFix 8. Изолирующее кольцо абатмента SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces – Replacement Male, 4 pieces, pink, 1.1 kg retention force	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EMD-580509 pink, производитель RTP France s.n.c., Франция
4	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, 4 pieces, blue, 0.7 kg retention force	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EC-704157 BLUE, производитель RTP France s.n.c., Франция
5	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, green, 1.8 kg retention force	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EMD-67293 GREEN, производитель RTP France s.n.c., Франция
6	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария

	pieces, orange, 1.1 kg retention force	Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EMD-481428 ORANGE, производитель RTP France s.n.c., Франция
7	Матрица к абатменту SIC LocFix Replacement Male, extended application, 4 pieces, red, 0.6 kg retention force	полимер Grilamid (Grilamid TR 90), производитель EMS-Grivory, Швейцария Марка красителя RTP 299 F X 133979 NS EC-56149 red, производитель RTP France s.n.c., Франция
Принадлежности:		
11	Позиционер абатмента SICvantage Positioning Aid 16° and 30° for SICvantage "Safe on Four"	Сплав X46CrS13 – производитель «СРМ Präzisionsdrehtechnik GmbH», Германия
12	Кольцо изоляционное SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces	Винил-метил-силикон- каучук, производитель DMH GmbH, Германия

Цветовое покрытие получено методом оксидирования - эффект электрохимического окрашивания поверхности достигается без применения специальных красителей и только за счет оксидной пленки. Поверхность подвергается анодированию с образованием оксидной пленки (TiO₂). Наличие оксидной пленки придает изделию химическую прочность и изменяет цвет поверхности покрытия. Цвет оксидной пленки титана зависит от напряжения тока при оксидировании.


10. Применение


10.1. Преимущества

Инновационное соединение имплантат-абатмент, сочетающее новый тип эффективных рабочих процедур от временного до завершающего восстановления. Эффективность повышена при максимальном сохранении параметров безопасности.



Surgical Protocol as with SICmax®

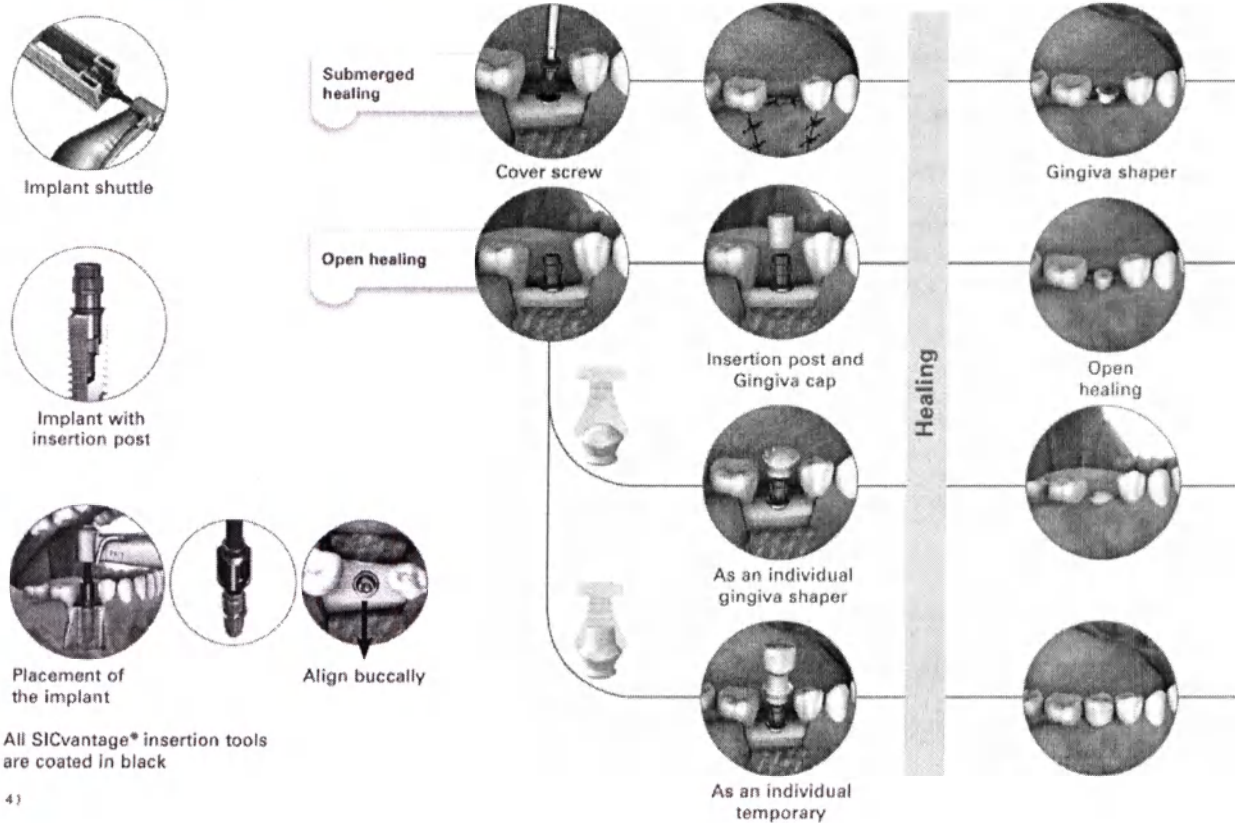

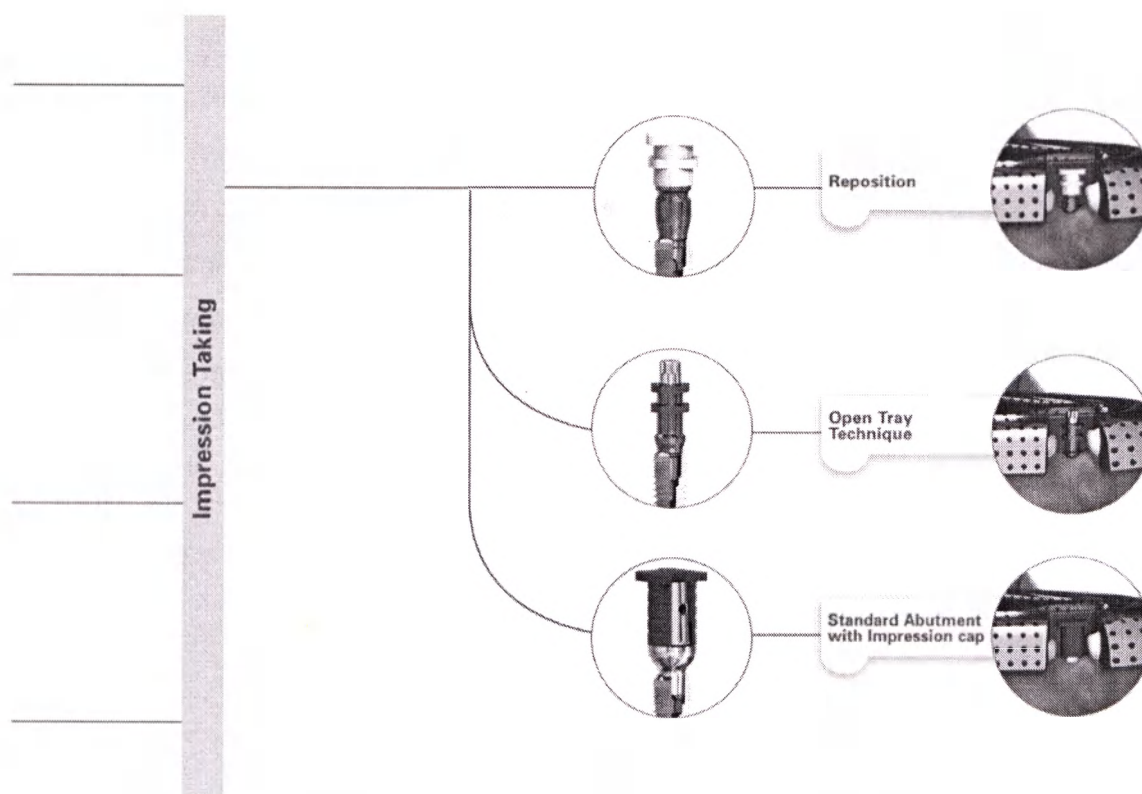


«Создать единое из двух». В конических соединениях существенное влияние на механические свойства оказывают угол конуса и длина конуса. Конус Морзе с общим углом конуса $2,8^\circ$ обеспечивает превосходную самофиксацию между имплантатом и абатментом, являющуюся неразъемной или «холодносварной». Большой конус длиной 3 мм равномерно и глубоко распределяет силы давления и изгиба в имплантате и окружающей кости. Процесс сварки обеспечивает практически цельный имплантат с максимальной жесткостью и практически без микродвижений. Простое удаление абатмента обеспечивается специальным инструментом - экстрактором.

«Вы все еще ввинчиваете или просто вставляете?» Механические свойства конуса Морзе позволяют применять его с использованием винта или без использования винта. Если используется винт, то следует убедиться, что на всех этапах процедуры абатменты затягиваются с усилием 20 Нсм. Такое усилие гарантирует надежное погружение абатмента в имплантат / лабораторный имплантат.


«Трансферный ключ - это уже прошлое». Благодаря технологии SIC «Swiss Cross Technology®» трансферные ключи для снятия оттисков или вставки абатмента больше не нужны. «Swiss Cross» с индексацией посредством 4 продольных параллельных канавок обеспечивает точный противоповоротный механизм также передачу чрезвычайно высоких крутящих моментов. Перекручивание или холодная сварка установочного штифта практически невозможны вследствие того, что силы

прилагаются под углом бокового наклона 90° на поверхность канавки, что подтверждается многими сотнями испытаний.

«Простота обращения» Благодаря глубокому конусу, фиксация абатмента - это удовольствие, особенно в задней области. Абатмент вводится в конус и устанавливается в промежуточное положение при помощи «Swiss Cross». Индекс определяется поворотом вправо или влево, абатмент входит в интерфейсные призмы и контактирует с конусом. Затем фиксационный винт можно затянуть с усилием 20 Нсм или восстановление можно довести до конечного положения путем аккуратного прикусывания или постукивания.

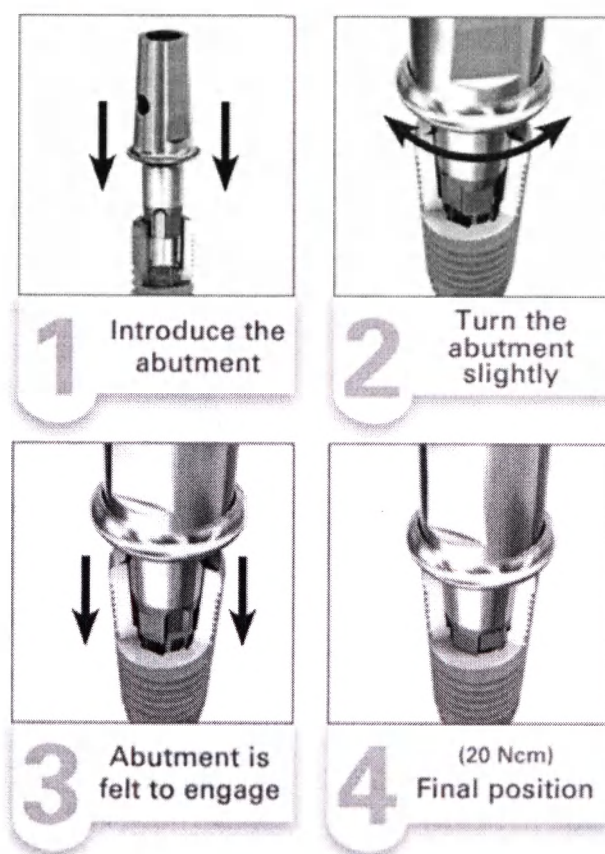


10.2. Протезирование с помощью ортопедических элементов с коническим соединением

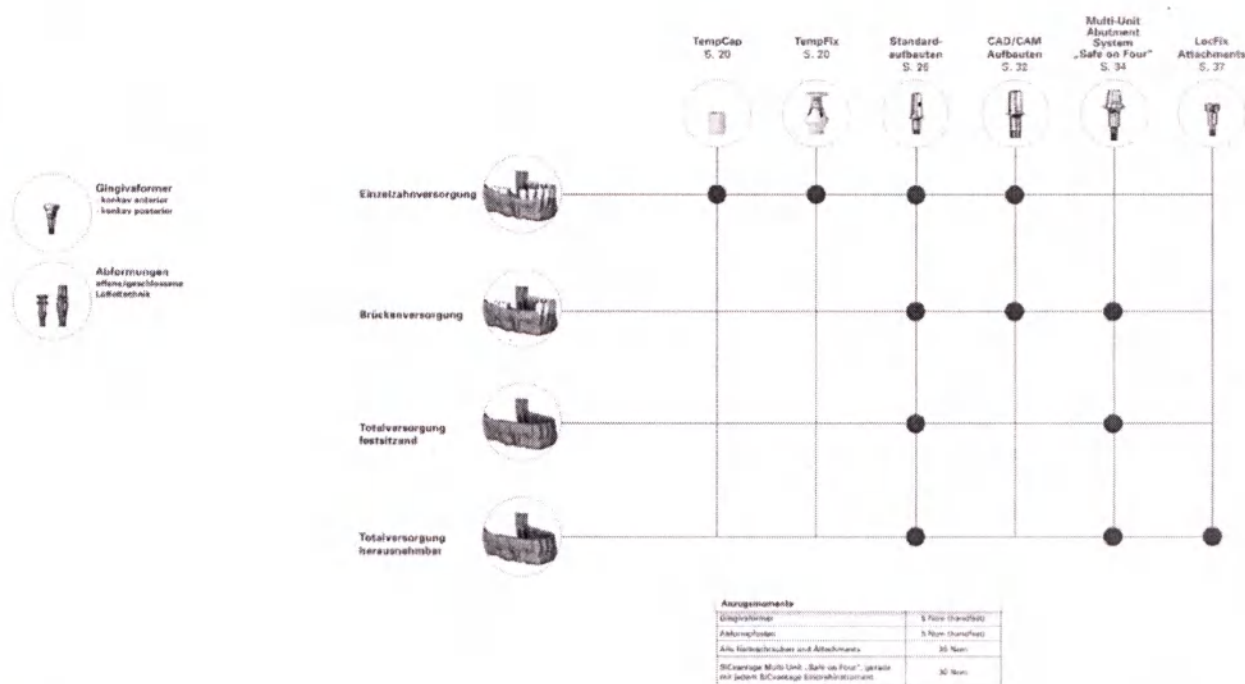


SIC invent Prothetischer Leitfaden

PROVISORISCHE VERSORGUNGEN

FINALE VERSORGUNGEN

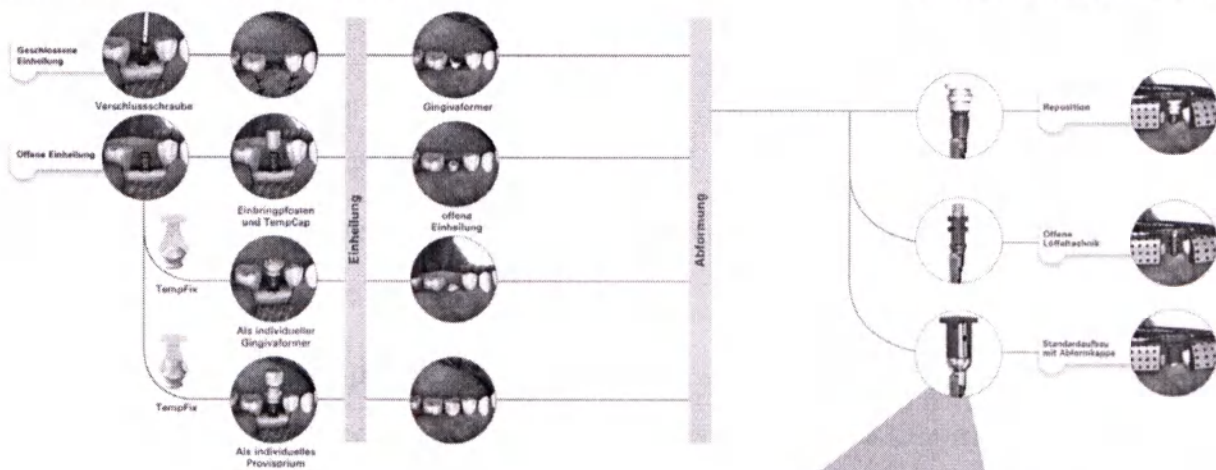



Effizienter Workflow mit Abformkappe

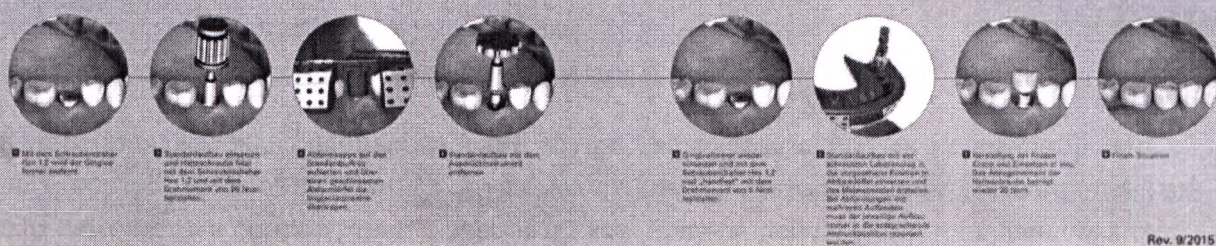

Rev. 9/2015

10.3. Протезирование с помощью ортопедических элементов с шестигранным соединением

SIC Invent Prosthetic Guideline

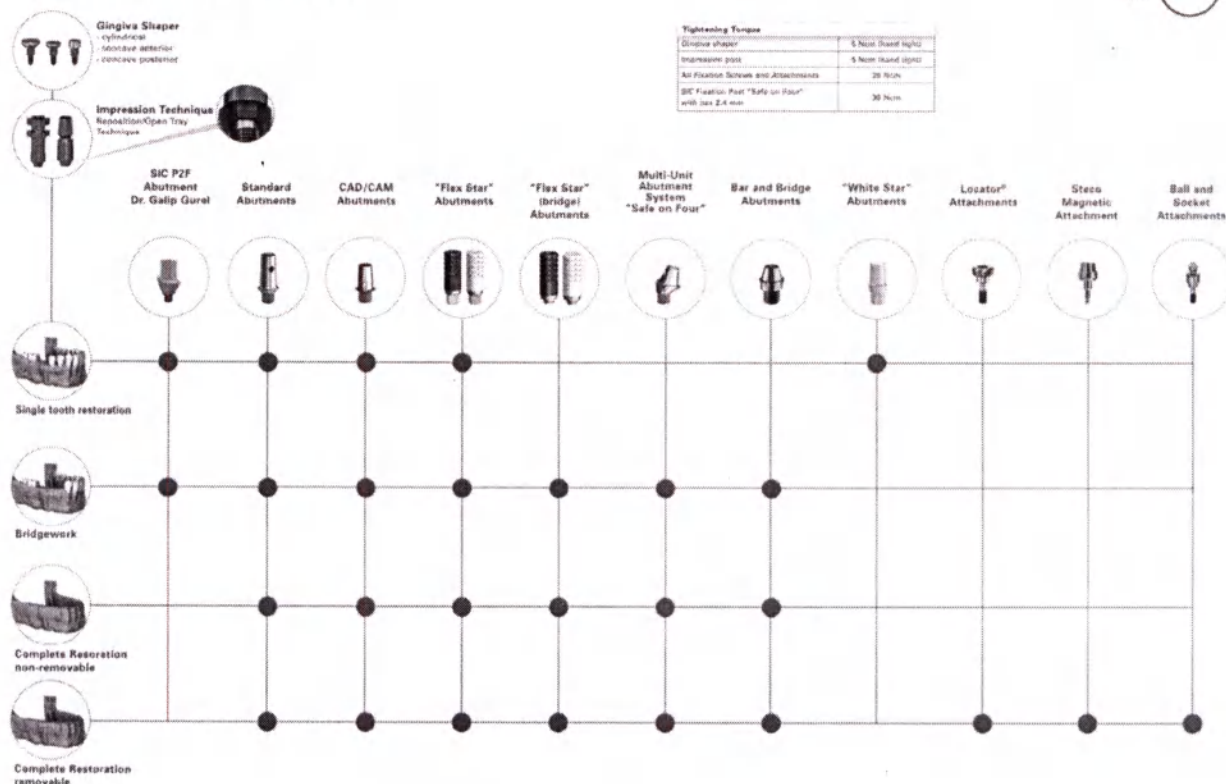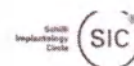

10.4. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от +10 °C до +25 °C;
- относительная влажность воздуха 98 % при температуре + 25 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

11. Условия транспортировки и хранения

Место хранения: Ортопедические элементы SIC должны храниться в оригинальной упаковке при комнатной температуре, в чистом и свободном от пыли месте и защищаться от повреждений.

Ортопедические элементы SIC должны храниться в сухом месте.

Транспортирование упакованных изделий осуществляется в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, в трюмах судов, отапливаемых и герметизированных отсеках самолетов в соответствии с требованиями правил, действующих на данном виде транспорта, при следующих условиях окружающей среды:

- температура окружающей среды от -2 °C до +25 °C;
- относительная влажность воздуха 98 % при температуре + 25 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Хранение изделий в упаковке изготовителя при следующих условиях окружающей среды:

- температура окружающей среды от -5 °C до +25 °C;
- относительная влажность воздуха 98 % при температуре + 25 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

12. Очистка и дезинфекция

Ортопедические элементы SIC поставляются нестерильными и их необходимо очищать и стерилизовать перед первым использованием.

Меры предосторожности:

- Процедуры очистки должны выполняться до клинического применения.
- Не используйте теплую воду.
- При использовании автоматизированной очистки и дезинфекции, избегайте прямого контакта изделий друг с другом.
- Устройства не могут быть очищены с использованием перекиси водорода или веществ с высоким содержанием хлора или щавелевой кислоты. Дезинфицирующий раствор должен быть без альдегида.
- Не применяйте необоснованную силу, чрезмерный перегиб и т.п.

Ручные процедуры предварительной очистки

Изделия должны быть помещены в холодную водопроводную воду (комнатной температуры) на 60 минут.

Ручные процедуры очистки

- Промойте изделия под холодной водопроводной водой, пока все видимые загрязнения не будут удалены. Твердые загрязнения должны быть удалены мягкой щеткой.
- Поместите продукты в ферментативный очиститель (например, щелочной очиститель 0,5% neodisher MediClean) на 10 минут при максимальной температуре 40 ° C (104 ° F).
- Промойте изделия под холодной водопроводной водой, чтобы удалить моющее средство.
- При ручной сушке пользуйтесь безворсовой тканью.

Ручные процедуры дезинфекции

- Полностью погрузите изделие в дезинфицирующее средство (например, Cidex OPA) при 20 ± 2 ° C ($68 \pm 3,6$ ° F) на 12 минут.
- Погрузите изделие на 1 минуту в холодную деминерализованную воду.
- Промойте холодной деминерализованной водой для удаления оставшихся дезинфицирующих средств.

Автоматические процедуры очистки

- Предварительная очистка в течение 4 минут с холодной водопроводной водой.
- Очистка ферментативным очистителем (например, щелочным очистителем 0,5% neodisher MediClean) в течение 6 минут и максимальной температурой 55 ° C (131 ° F).

- Нейтрализация с использованием теплой деионизированной воды ($> 40^{\circ}\text{C}$ « 104°F ») в течение 3 минут.

- Промойте изделия теплой деионизированной водой ($> 40^{\circ}\text{C}$ « 104°F ») в течение 2 минут.

Стерилизация

Перед стерилизацией оригинальную упаковку следует удалить, а изделия обернуть (например, Brömeda REF: 68170912) в стерилизационную бумагу. SIC invent AG рекомендует следующие процедуры стерилизации:

Процедура стерилизации паром	Параметры
Метод фракционированного предварительного вакуума	132°C в течение 4 мин., со временем высыхания 20 мин.
Метод гравитации	121°C в течение 90 мин., со временем высыхания 15 мин.

13. Утилизация



По окончании срока службы изделия ортопедические элементы SIC необходимо утилизировать в соответствии с национальным законодательством и соответствующими действующими нормативами. По спецификации утилизации медицинских изделий на территории Российской Федерации, просьба обращаться к уполномоченному представителю производителя: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, эт. 1, к. 179-180 тел.: 8 (495) 780-52-45, (495) 780-52-46, (495) 780-52-47.

Класс опасности отходов – Б.

14. Маркировка медицинского изделия

Применяемые обозначения представлены в Таблице 4:


Таблица 4

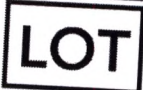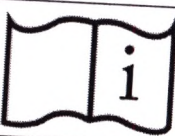
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Производитель
	Для одноразового использования
	Обратитесь к указаниям, прежде чем использовать
	Этот символ является обязательной маркировкой для устройств, поступающих на европейский рынок, для указания

	соответствия основным требованиям охраны здоровья и безопасности, изложенным в европейских директивах. Символ может сопровождаться четырехзначным идентификационным номером нотифицированного органа.
	Дата производства
	Ортопедические элементы SIC поставляются нестерильными и их необходимо очищать и стерилизовать перед первым использованием.


Маркировка медицинских изделий представлена в Таблице 5.

Таблица 5

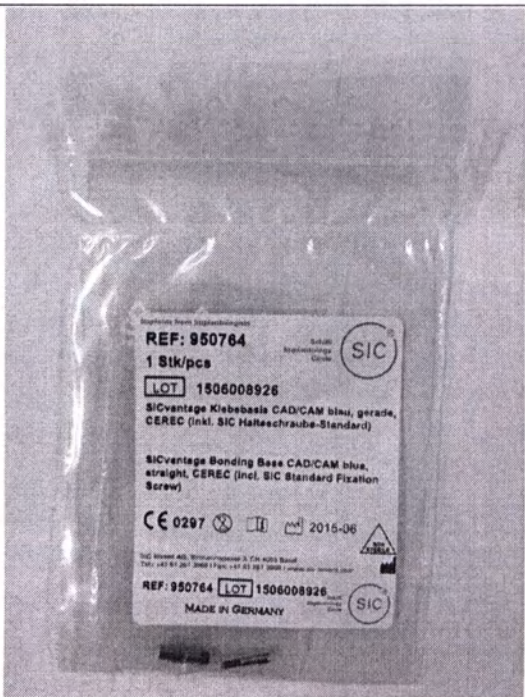
Маркировка на упаковке абатментов:	Маркировка на упаковке титановых оснований
	
Маркировка на упаковке скан-адаптеров	Маркировка на упаковке формирователей десен

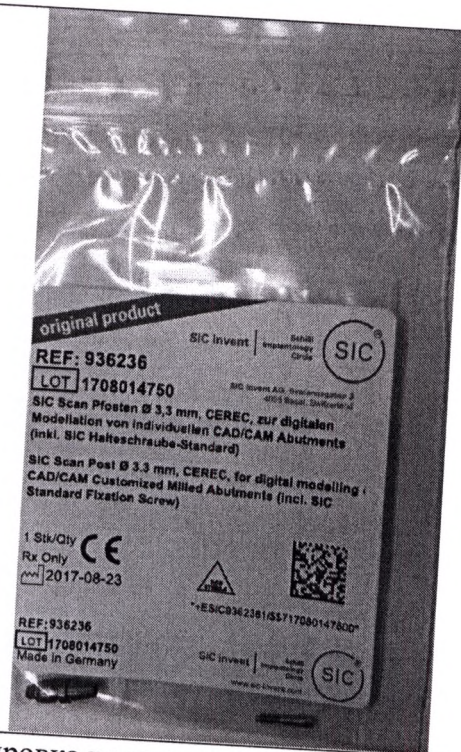

Маркировка на упаковке трансферов

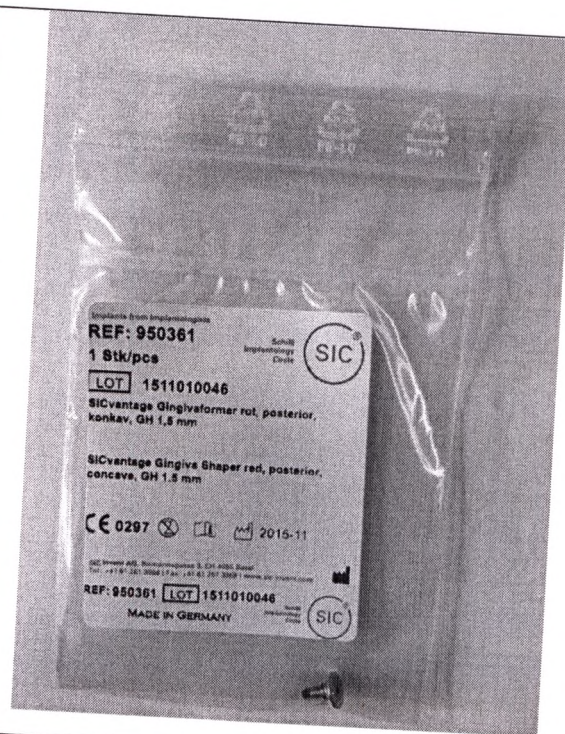


Маркировка на упаковке аналогов

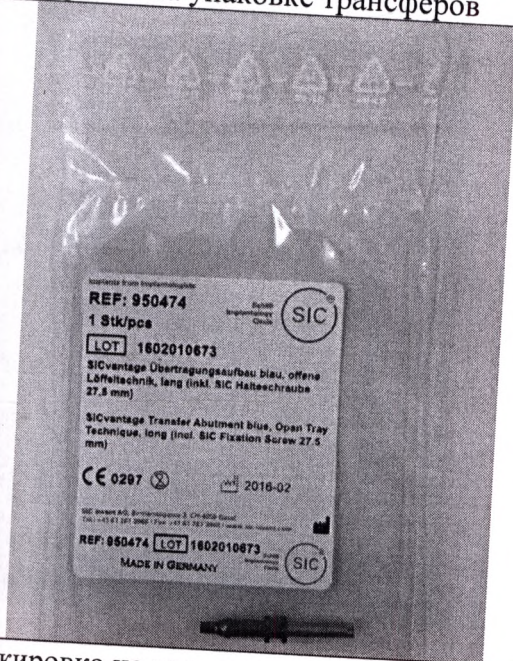


Маркировка на упаковке винтов





Маркировка на упаковке колпачков

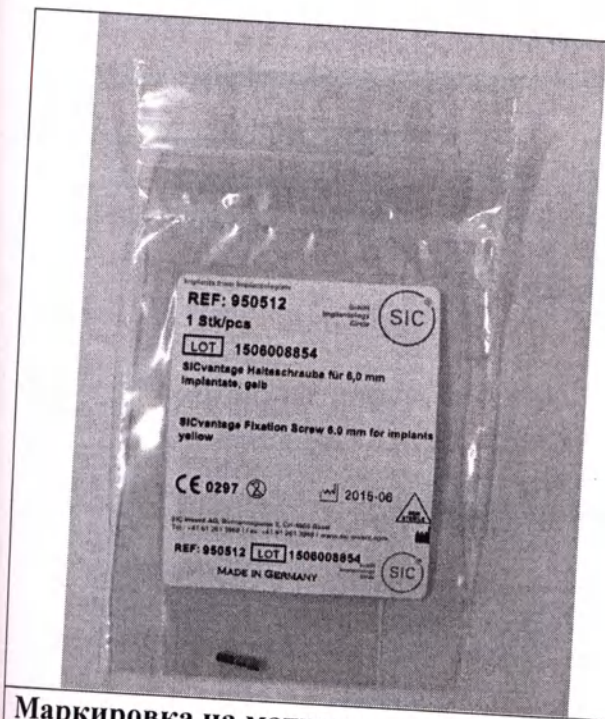

Маркировка на матрицах к абатменту

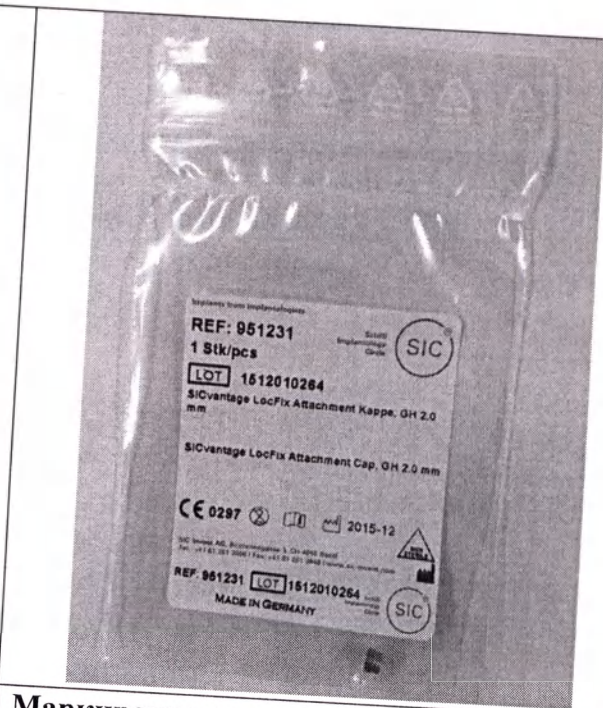

Маркировка на позиционере абатмента

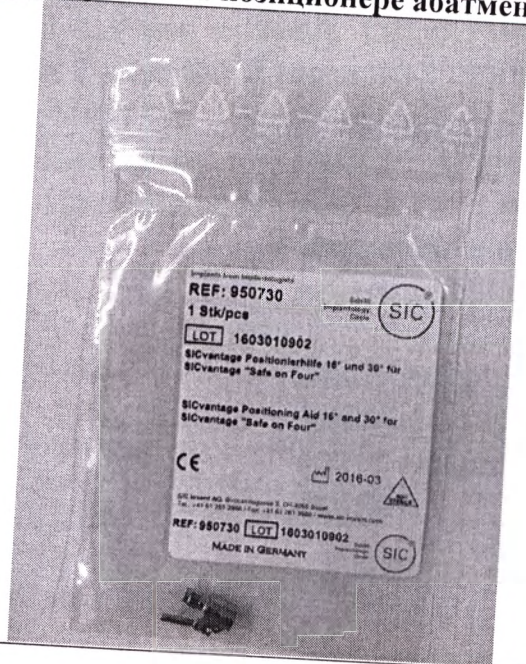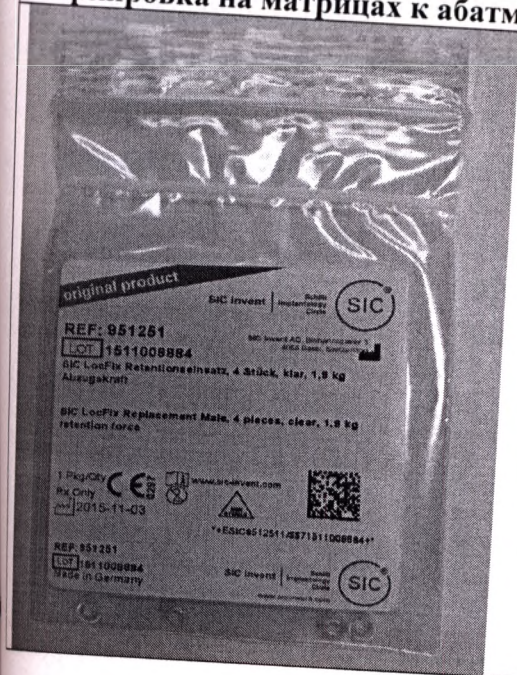

Макет маркировки на русском языке :

Оригинальная продукция

SIC invent AG / ЭсАйСи инвент АГ	Член Круга Имплантологии Шилли (Schilli Implantology Circle)
----------------------------------	---

 Номер по каталогу: 535300.01

 № партии: 0614A-210708-1C52	 Изготовитель: ЭсАйСи инвент АГ Бирманнсгассе 3 4055 Базель, Швейцария (SIC invent AG Birmannsgasse 3 4055 Basel, Switzerland)
---	---

SIC Стандартный абатмент CAD/CAM 0 3,3 мм, прямой, GH 0,5 мм, для системы Бронемарк Систем РП/Branemark System® RP (комплект винтов SIC для системы Branemark System® прилагается)

Количество: 1 Шт.	 0297	RX Only/ Только по предписанию врача!	Внимание: Нестерильно!	HIBC/ Штриховой код медико- фармацевтической промышленности UDI/Уникальный идентифицирующий код медицинского изделия
----------------------	--	--	---------------------------	---


Обратитесь к руководству по
эксплуатации!


Запрет на повторное использование!


Интернет: www.sic-invent.com	Дата производства  31.12.2012	Использовать до:  31.08.2016
---	--	--

+ESIC9361931/\$\$71212003804/ 1£D2^16103 0/14p202qi03J/Q5T

Сделано в Германии  Номер по каталогу: 936193  № партии: 0614A-210708-1C52XXXX	SIC invent AG / ЭсАйСи инвент АГ Член Круга Имплантологии Шилли (Schilli Implantology Circle) Интернет: www.sic-invent.com
---	--

15. Упаковка медицинского изделия

Ортопедические элементы марки SIC упакованы в прозрачные пакеты, размером Д*Ш-120 мм. *70 мм. $\pm 0,025$ мм. из линейного полиэтилена низкой плотности (марки LDPE, толщина полиэтиленовой плёнки 40 ~100 мкр и плотность полиэтиленовой пленки 0.92 ~ 0.93 г/см³) с замком типа Zip-Lock,, производства «SIC invent AG», Швейцария. На полиэтиленовые пакеты наклеены этикетки, информация о которых представлена в пункте 12 (Маркировка медицинского изделия. Макет маркировки на русском языке), данного документа.

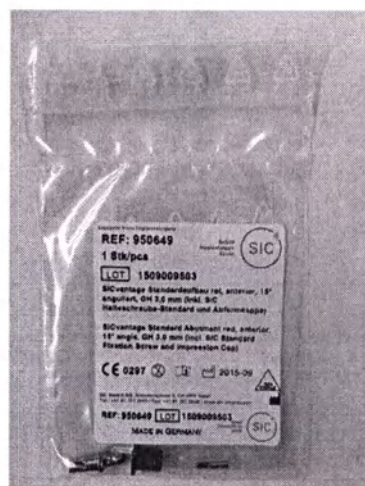

16. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ISO 13485:2012	Изделия медицинские. Системы управления качеством
ISO 10993	Биологическая оценка медицинских изделий.
ISO 14971: 2012	Применение управления рисками для медицинских устройств
ISO 15223:2012	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации

17. Гарантии


Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Ортопедических элементов для протезирования на имплантатах марки SIC с принадлежностями» требованиям документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных производителем. Срок годности не ограничен.

Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки потребителю – не менее 12 мес.

Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Абатменты:

Чертеж абатментов SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post: голубой, красный

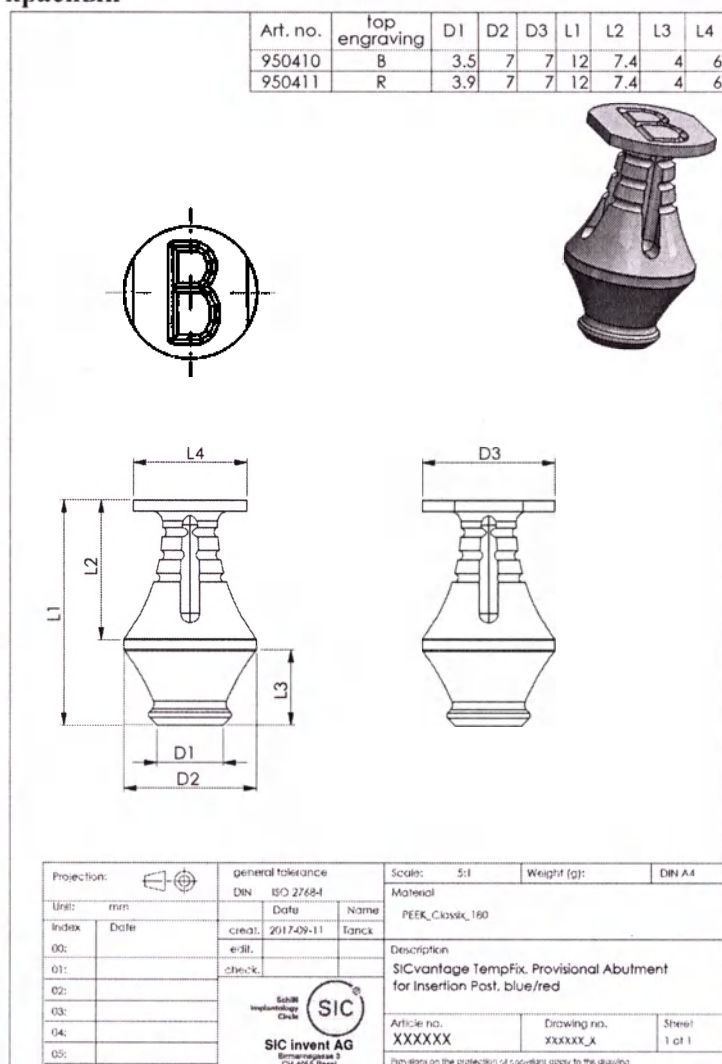


Номер артикула	Цветовая кодировка	Диаметр D1	Диаметр D2	Диаметр D3	Длина L1	Длина L2	Длина L3	Длина L4
950410	голубой (blue)	3,5	7	7	12	7,4	4	6
950411	красный (red)	3,9	7	7	12	7,4	4	6

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм	Дата			Наим.	Материал	
Индекс	Дата	Созд.	2017-09-11	Tanck	PEEK_Classix_180	
00:	Редак.				Описание: SICvantage TempFix, Provisional Abutment for Insertion Post	
01:	Пров.					
02:						
03:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:						1 из 1
05:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

Геометрия соединения: Insertion Post.

Чертеж абатментов SICvantage Standard:серый, голубой, красный, так же варианты постериор для боковых зубов и антериор для передней группы зубов

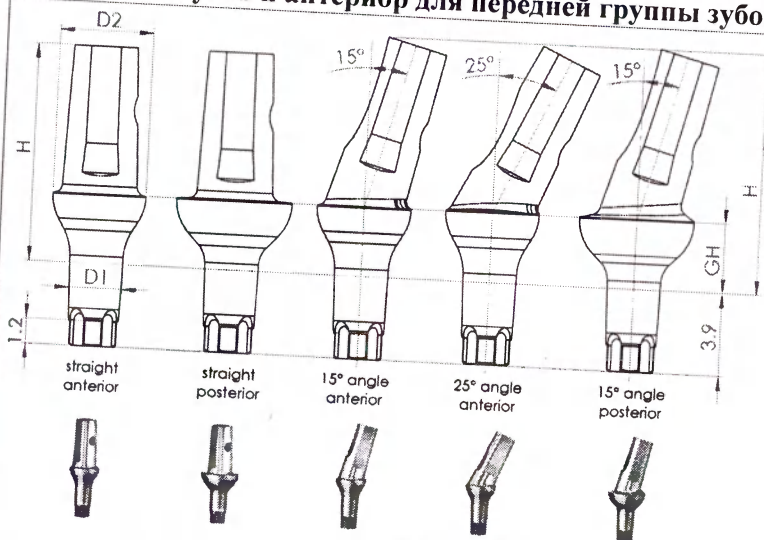

		Art. Nr.	GH	H	D1	D2
Anterior, straight	grey	950601	1	8	2.2	3.8
		950602	2	9	2.2	3.8
		950603	3	10	2.2	3.8
	blue	950621	1	8	2.5	4.4
		950622	2	9	2.5	4.4
Posterior, straight	blue	950623	1.5	8.5	2.5	5.4
		950624	3	10	2.5	5.4
	red	950641	1	8	2.9	5.4
		950642	2	9	2.9	5.4
		950643	3	10	2.9	5.4
Anterior, 15° angle	grey	950608	1	8	2.2	3.8
		950609	2	9	2.2	3.8
		950610	3	10	2.2	3.8
	blue	950628	1	8	2.5	4.4
		950629	3	10	2.5	4.4
Anterior, 25° angle	blue	950631	1.5	8.5	2.5	5.4
		950632	3	10	2.5	5.4
	red	950651	1.5	8.5	2.9	5.4
		950652	3	10	2.9	5.4
		950653	5	12	2.9	6.4

Projektion:	ISO 2768-f	Material:	3.7165
Längeneinheit:	mm	Werkstoff:	3.7165
Index:	Datum	Erst:	17.11.2015
00:		Bearb.	SKE
01:		Gepr.	
02:			
03:			
04:			
05:			

SIC Invent AG
Birmansgasse 3
CH-4055 Basel

Bezeichnung: Standard Abutments, all sizes
Regulatory for SICvantage max

Artikelnummer: XXXXXX
Zeichnungsnummer: XXXXXX.X
Blatt: 1 von 1


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f	Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Материал		
Индекс Дата	Созд.	17.11.2015	3.7165 Наим.: Титан марки 5	
00:	Редак.		Описание:	
01:	Пров.		Standard Abutment, все размеры	
02:			Регулятор для SICvantage max	
03:			Артикул №:	Чертеж №:
04:				Лист
05:				1 из 1

К данному чертежу применимы положения об авторских правах

	серый	голубой	красный
прямой передний	950601, 950602, 950603	950621, 950622, 950623, 950624	950641, 950642, 950643
прямой боковой		950623, 950624	950641, 950642, 950643
передний угловой 15°	950608, 950609, 950610, 950628, 950629, 950630	950628, 950629, 950630	950648, 950649, 950650
передний угловой 25°		950634, 950635, 950654, 950655	
боковой угловой 15°		950631, 950632, 950633, 950651, 950652, 950653	

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross.

Чертежи абатментов SICvantage Multi-Unit Abutment "Safe on Four"- красный, голубой


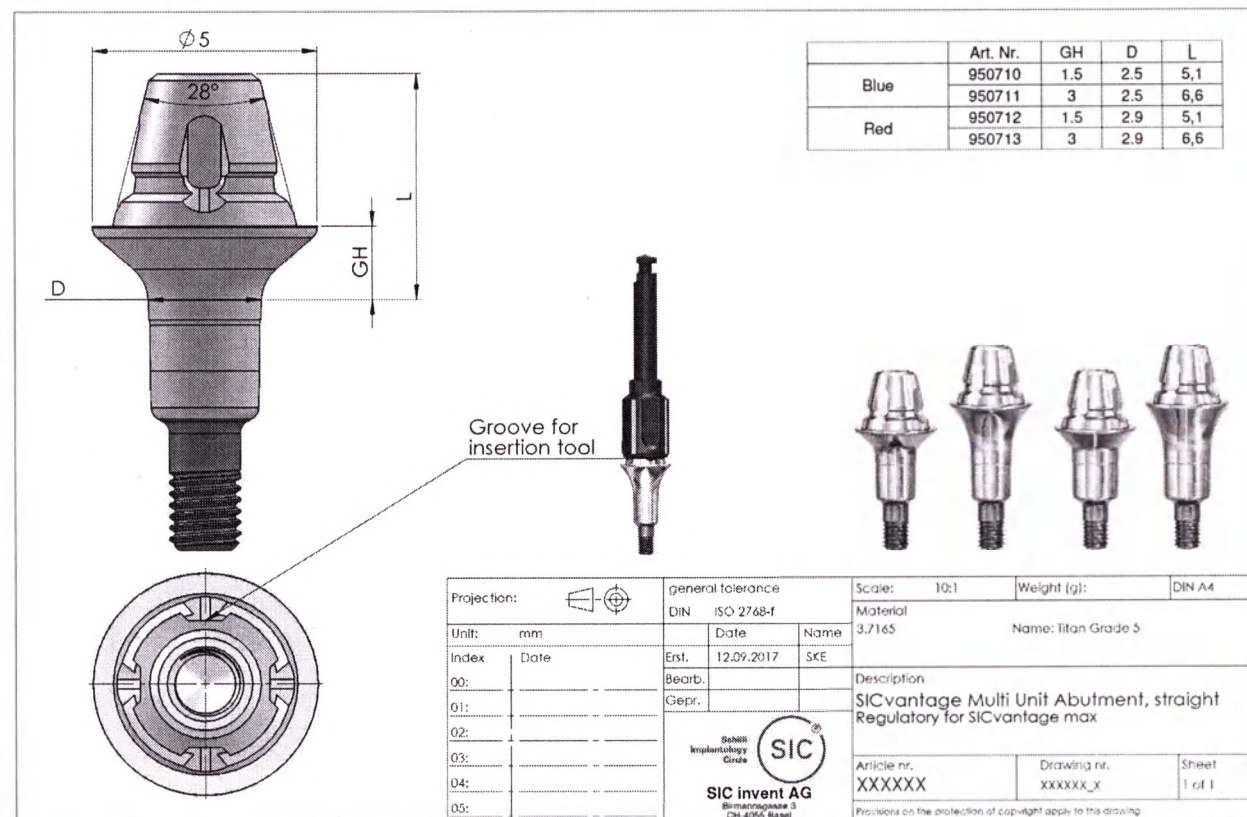


Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4	
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5		
Индекс	Дата	Созд.	12.09.2017	SKE			
00:		Редак.			Описание: SICvantage Multi Unit Abutment, straight Регулятор для SICvantage max		
01:		Пров.					
02:							
03:		SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:							1 из 1
05:					К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

	Артикул номер	GH	D	L
Голубой	950710	1,5	2,5	5,1
	950711	3	2,5	6,6
Красный	950712	1,5	2,9	5,1
	950713	3	2,9	6,6

Геометрия соединения: Morse Taper.

Чертеж абатментов SICvantage Multi Unit Abutment, angulated голубой и красный. Регулятор для SICvantage max

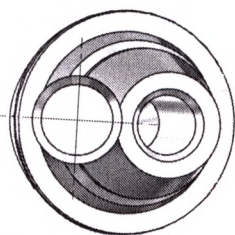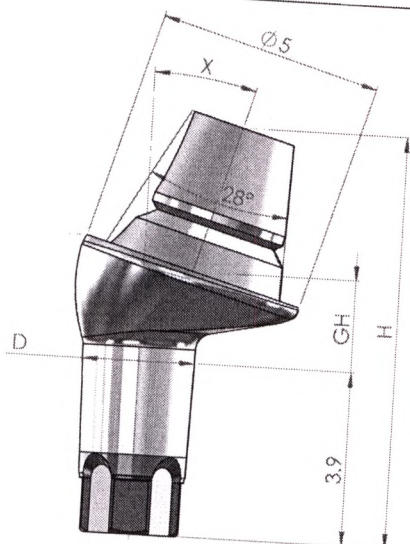

	Art. Nr.	H	GH	X	D
Blue	950716	9.2	1.5	16°	2.5
	950717	10.7	3.0	16°	2.5
	950718	9.2	1.5	30°	2.5
	950719	11.1	3.0	30°	2.5
Red	950720	9.2	1.5	16°	2.9
	950721	10.7	3.0	16°	2.9
	950722	9.4	1.5	30°	2.9
	950723	11.2	3.0	30°	2.9



Projection:		general tolerance DIN ISO 2768-f		Scale: 10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm	Date	Erst. 15.11.2015	Name SKE	Material 3.7165 Name: Titan Grade 5		
Index	Date	Gepr.		Description SICvantage Multi Unit Abutment, angulated Regulatory for SICvantage max		
00:				Article nr. XXXXXX		
01:				Drawing nr. XXXXXX_X		
02:				Sheet 1 of 1		
03:				Provisions on the protection of copyright apply to this drawing		
04:						
05:						

Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1		Вес (г):		DIN A4	
Ед.: мм	Индекс	Дата	Созд.	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5				
00:			Редак.		Описание: SICvantage Multi Unit Abutment, angulated Регулятор для SICvantage max				
01:			Пров.						
02:			SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист 1 из 1	
03:			К данному чертежу применимы положения об авторских правах						
04:									
05:									

	Артикул номер	H	GH	X	D
Голубой	950716	9,2	1,5	16°	2,5
	950717	10,7	3,0	16°	2,5
	950718	9,2	1,5	30°	2,5
	950719	10,7	3,0	30°	2,5
Красный	950720	9,2	1,5	16°	2,9
	950721	10,7	3,0	16°	2,9
	950722	9,4	1,5	30°	2,9
	950723	11,2	3,0	30°	2,9

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross.

Чертеж абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", Titanium (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")

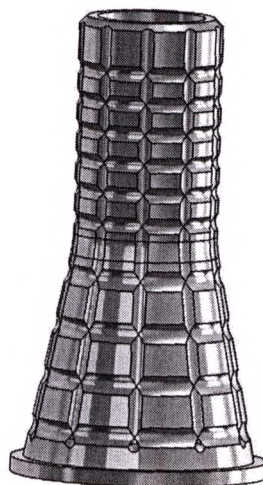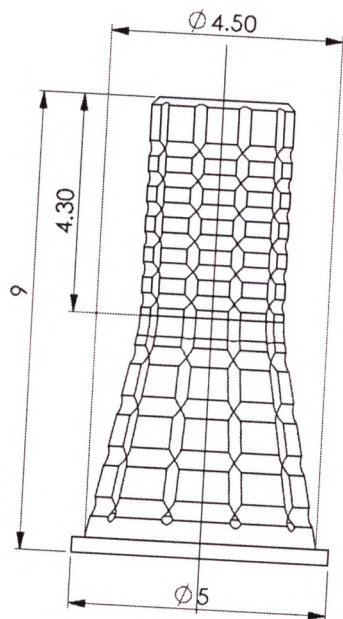


Projection:		general tolerance		Scale: 10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm		DIN	ISO 2768-f	Material		
Index	Date	creat.	Date	Name	3.7165 Name: Ti-6Al-4v	
00:		edit.	2017-09-11	Tanck		
01:		check.			Description	
02:					SIC Crown Base "Safe on Four", Titanium	
03:					Article no.	
04:					936270	
05:					Drawing no.	Sheet
					XXXXXX_X	1 of 1

Проекция:		общие допуски		Масштаб 10:1		Вес (г):		DIN A4	
Ед.: мм		DIN ISO 2768-f							
Индекс	Дата	Созд.	Дата	Наим.	Материал				
			2017-09-11	Tanck	3.7165 Наименование: Ti-6Al-4v				
00:		Редак.			Описание:				
01:		Пров.			SIC Crown Base "Safe on Four", титановое				
02:		SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:		Чертеж №:	Лист	
03:	936270					1 из 1			
04:	К данному чертежу применимы положения об авторских правах								
05:									

Геометрия соединения: Cone "Safe on Four"

Чертеж абатмент SIC Crown Base "Safe on Four", residue-free burn-out (incl. SIC Fixation Screw "Safe on Four")

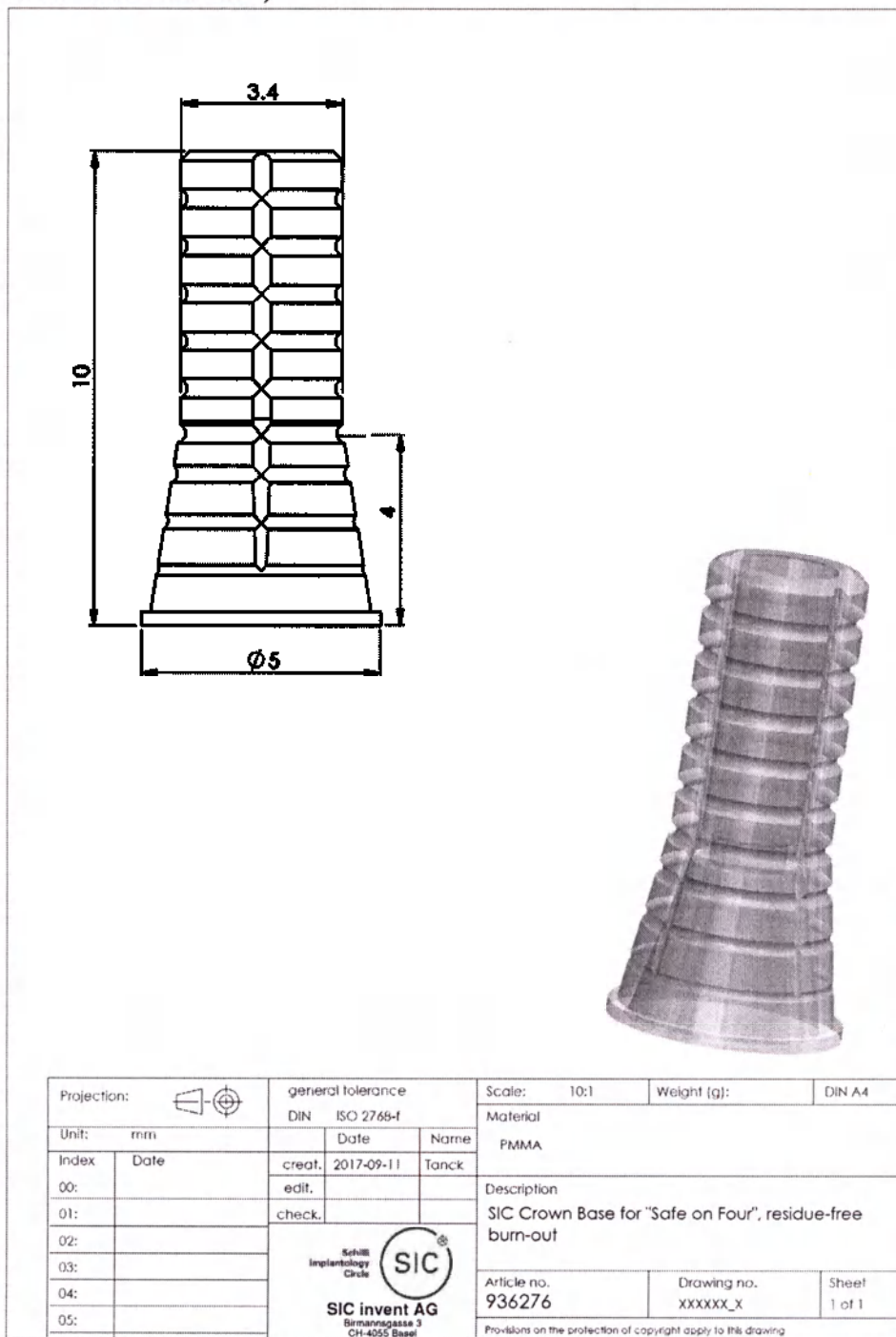


Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4			
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал PMMA				
Индекс	Дата	Созд.	2017-09-11	Tanck					
00:		Редак.			Описание: SIC Crown Base for “Safe on Four”, residue-free burn-out				
01:		Пров.							
02:		SIC invent AG Бирмангассе 3 СУ-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист		
03:					936276		1 из 1		
04:					К данному чертежу применимы положения об авторских правах				
05:									

Геометрия соединения: Cone "Safe on Four".

Чертеж абатмент SIC Standard Abutment "Safe on Four"

Art. no.	D1	D2	D3	A1	L1	L2	L3
936259	5	4.1	3.3	16°	7.52	3.4	1.5
936260	5	4.1	3.3	30°	7.90	3.4	1.5
936261	5	4.1	3.3	16°	9.07	3.4	3.0
936262	5	4.1	4.2	16°	9.20	3.4	3.0
936263	5	4.1	4.2	16°	7.63	3.4	1.5
936264	5	4.1	4.2	30°	8.15	3.4	1.5
936265	5	4.1	4.2	30°	9.86	3.4	3.0

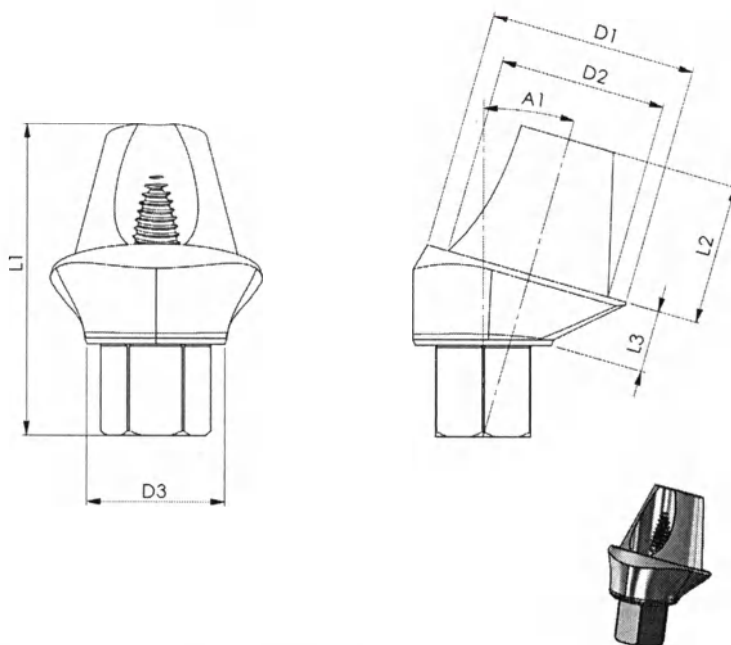


Projection:			General tolerance		Scale:	10:1	Weight (g):	DIN A4		
Unit:		mm	DIN	ISO 2768-f	Material	3.7165				
Index		Date	crea.	2017-09-11	Date	Name				
00:			edit.		Ti-6Al-4V					
01:			check.		Description					
02:			 Schill Implantology GmbH SIC invent AG Birmannsgasse 3 CH-4055 Basel							
03:										
04:										
05:										
05:										
		Article no.			XXXXXX		Drawing no.	XXXXXX_X	Sheet	1 of 1
Provisions on the protection of copyright apply to this drawing										

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	2017-09-11	Наим.	Материал 3.7065 Наименование: Ti-6Al-4V	
Индекс	Дата	Созд.	2017-09-11	Tanck		
00:		Редак.			Описание: SIC Standard Abutment "Safe on Four", угловой	
01:		Пров.				
02:		SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:
03:						Лист
04:					К данному чертежу применимы положения об авторских правах	
05:						

Артикул номер	Диаметр D1	Диаметр D2	Диаметр D3	Угол A1	Длина L1	Длина L2	Длина L3
936259	5	4,1	3,3	16°	7,52	3,4	1,5
936260	5	4,1	3,3	30°	7,90	3,4	1,5
936261	5	4,1	3,3	16°	9,07	3,4	3,0
936262	5	4,1	4,2	16°	9,20	3,4	3,0
936263	5	4,1	4,2	16°	7,63	3,4	1,5
936264	5	4,1	4,2	30°	8,15	3,4	1,5
936265	5	4,1	4,2	30°	9,86	3,4	3,0

Геометрия соединения: Нех 2.3 mm.

Чертеж абатмент SICvantage Milling Blank CAD/CAM

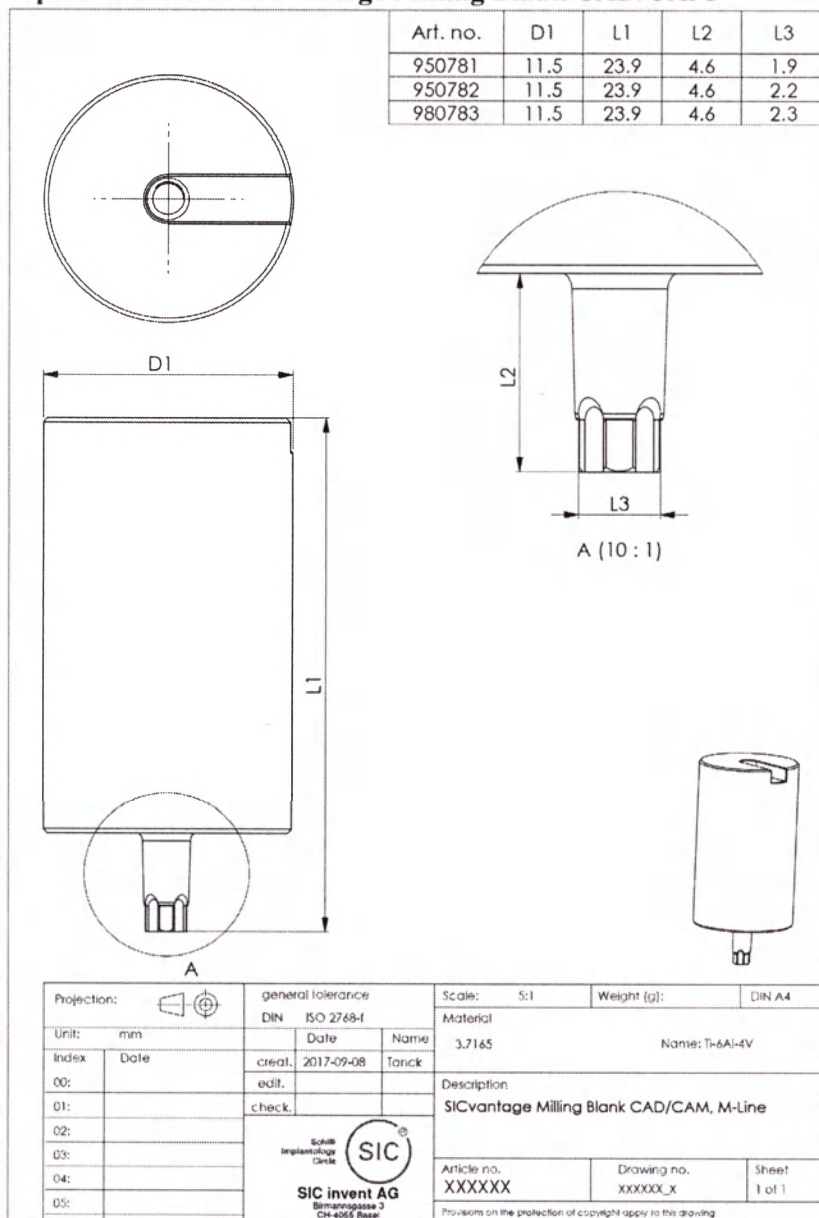


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм	Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V			
Индекс	Дата	Созд.				
00:	Редак.	2017-09-08	Tanck	Описание: SICvantage Milling Blank CAD/CAM, M-Line		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист 1 из 1
03:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
04:						
05:						

Артикул номер	Диаметр D1	Длина L1	Длина L2	Длина L3
950781	11,5	23,9	4,6	1,9
950782	11,5	23,9	4,6	2,2
950783	11,5	23,9	4,6	2,3

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross.

Чертеж абатмент SICvantage LocFix Attachment

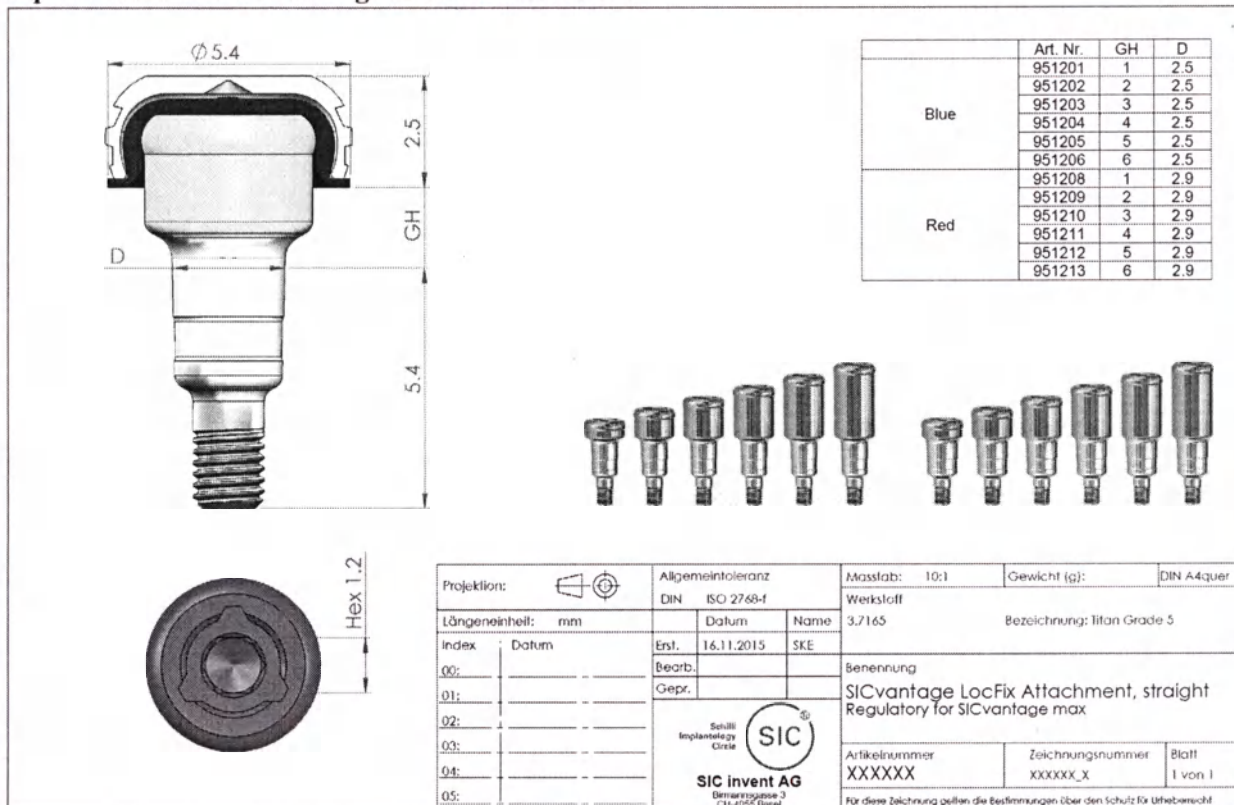


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм	Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5			
Индекс	Дата	Созд.				
00:	Ред.	16.11.2015	SKE	Описание: SICvantage LocFix Attachment, straight Регулятор для SICvantage max		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:						1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						

	Артикул номер	GH	D
Голубой	951201	1	2,5
	951202	2	2,5
	951203	3	2,5
	951204	4	2,5
	951205	5	2,5
	951206	6	2,5
Красный	951208	1	2,9
	951209	2	2,9
	951210	3	2,9
	951211	4	2,9
	951212	5	2,9
	951213	6	2,9

Геометрия соединения: Morse Taper.

Чертеж абатмент SIC Standard Abutment Ø 4.2 mm/ Ø 3.3 mm – голубой и красный

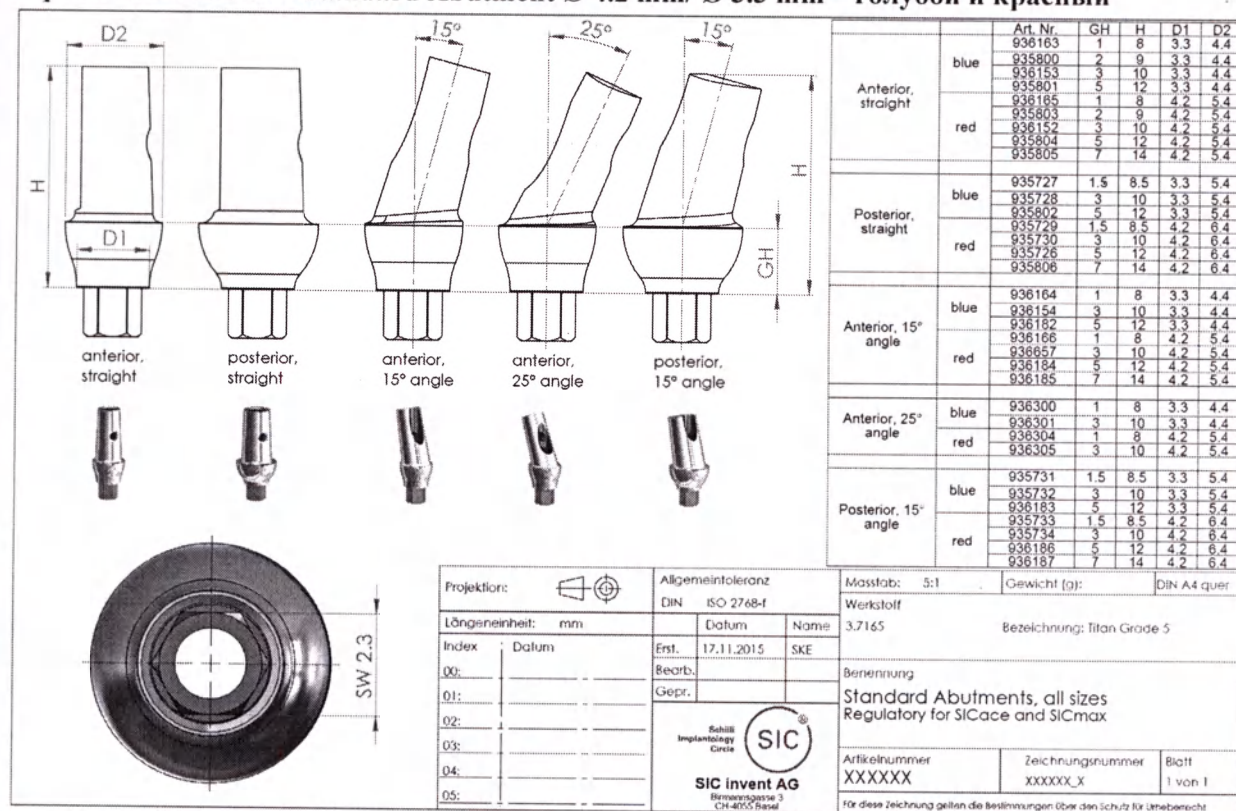


Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4		
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5			
Индекс	Дата	Созд.	17.11.2015	SKE				
00:	Редак.				Описание: Standard Abutment, все размеры Регулятор для SICase и SICmax			
01:			Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель				Артикул №:		Чертеж №:	Лист 1 из 1
03:								
04:					SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			
05:								

		артикул номер	GH	H	D1	D2
передний прямой	голубой	936163	1	8	3.3	4.4
		935800	2	9	3.3	4.4
		936153	3	10	3.3	4.4
		935801	5	12	3.3	4.4
	красный	936165	1	8	4.2	5.4
		935803	2	9	4.2	5.4
		936152	3	10	4.2	5.4
		935804	5	12	4.2	5.4
боковой прямой	голубой	935727	1.5	8.5	3.3	5.4
		935728	3	10	3.3	5.4
		935802	5	12	3.3	5.4
		935729	1.5	8.5	4.2	6.4
	красный	935730	3	10	4.2	6.4
		935726	5	12	4.2	6.4
		935806	7	14	4.2	6.4
передний угловой 15°	голубой	936164	1	8	3.3	4.4
		936154	3	10	3.3	4.4
		936182	5	12	3.3	4.4
		936166	1	8	4.2	5.4
	красный	936657	3	10	4.2	5.4
		936184	5	12	4.2	5.4
		936185	7	14	4.2	5.4
передний угловой 25°	голубой	936300	1	8	3.3	4.4
		936301	3	10	3.3	4.4
	красный	936304	1	8	4.2	5.4
		936305	3	10	4.2	5.4
боковой угловой 15°	голубой	935731	1.5	8.5	3.3	5.4
		935732	3	10	3.3	5.4
		936183	5	12	3.3	5.4
		935733	1.5	8.5	4.2	6.4
	красный	935734	3	10	4.2	6.4
		936186	5	12	4.2	6.4
		936187	7	14	4.2	6.4

Геометрия соединения: Hex 2.3 mm.

Чертеж абатмент SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 3.3 mm и SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel Ø 4.2 mm (рисунок для всех размеров абатментов SIC P2F Abutment Dr. Galip Gurel)

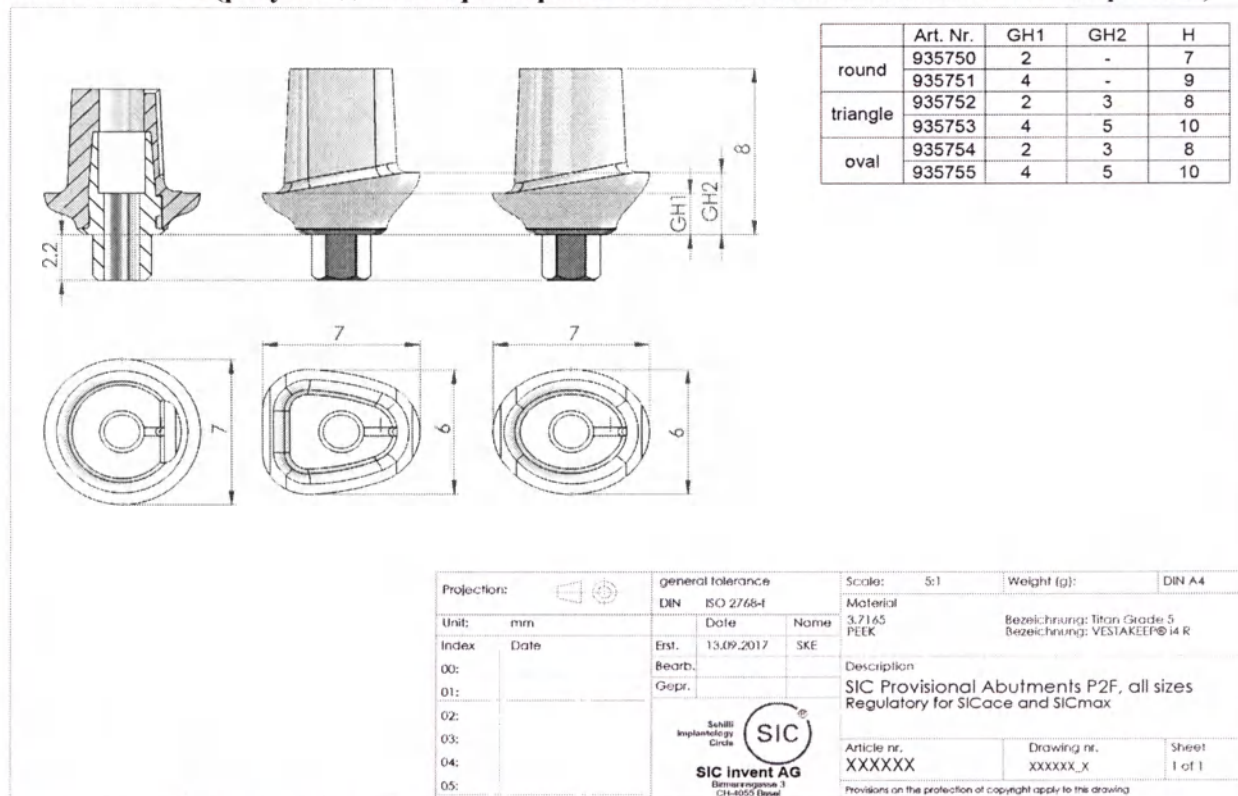

Round – круглый, triangle – треугольный, oval – овальный.

Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5 PEEK Наим: VESTAKEEP i4 R	
Индекс	Дата	Созд.	13.09.2017	SKE		
00:		Редак.			Описание: SIC Provisional Abutment P2F, все размеры Регулятор для SICace и SICmax	
01:		Пров.				
02:						

03:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель	Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:		К данному чертежу применимы положения об авторских правах		1 из 1
05:				



	артикул	GH1	GH2	H
круглый	935750	2	-	7
	935751	4	-	9
треугольный	935752	2	3	8
	935753	4	5	10
овальный	935754	2	3	8
	935755	4	5	10

Геометрия соединения: Hex 2.3 mm.

Титановые основания:

Чертеж титановое основание SIC Bonding Base CAD/CAM Ø 3.3 mm/ Ø 4.2 mm, straight, CEREC – голубой и красный

Art. no.	Color	D1	D2	D3	L1	L2	L3
936228	blue	4.05	3	3.3	9.85	4.65	3
936229	red	4.50	3	4.2	9.85	4.65	3
936188	blue	4.05	3	3.3	7.15	4.65	0.3
936189	red	4.50	3	4.2	7.15	4.65	0.3

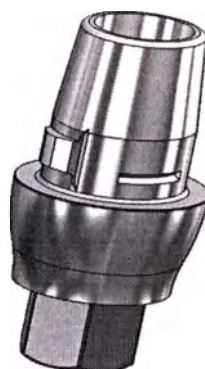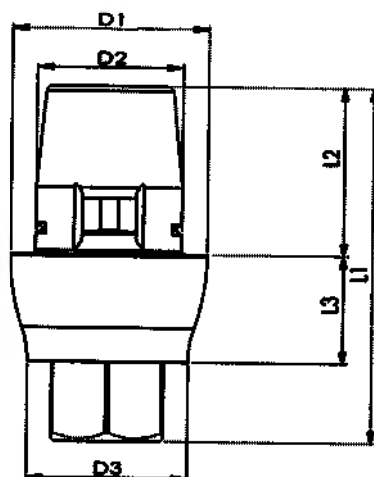


Projection:		general tolerance	DIN ISO 2768-f	Scale:	10:1	Weight (g):		DIN A4
Unit:	mm	Date		Material	3.7165	Name:	Ti-6Al-4V	
Index	Date	creat.	2017-09-11	Tanck		Description	SIC Bonding Base CAD/CAM, straight, CEREC	
00:		edit.				Article no.	XXXXXX	Drawing no. XXXXX_X
01:		check.				Sheet	1 of 1	
02:						Provisions on the protection of copyright apply to this drawing		
03:								
04:								
05:								

Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4v		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:		Редак.		Описание: SIC bonding Base CAD/CAM, straight, CEREC		
01:		Пров.				
02:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:						1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						

артикул	цвет	D1	D2	D3	L1	L2	L3
936228	голубой	4.05	3	3.3	9.85	4.65	3
936229	красный	4.50	3	4.2	9.85	4.65	3
936188	голубой	4.05	3	3.3	7.15	4.65	0.3
936189	красный	4.50	3	4.2	7.15	4.65	0.3

Геометрия соединения: Hex 2.3 mm

Чертёж титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM, straight, GH 0.7 mm серый, голубой, красный

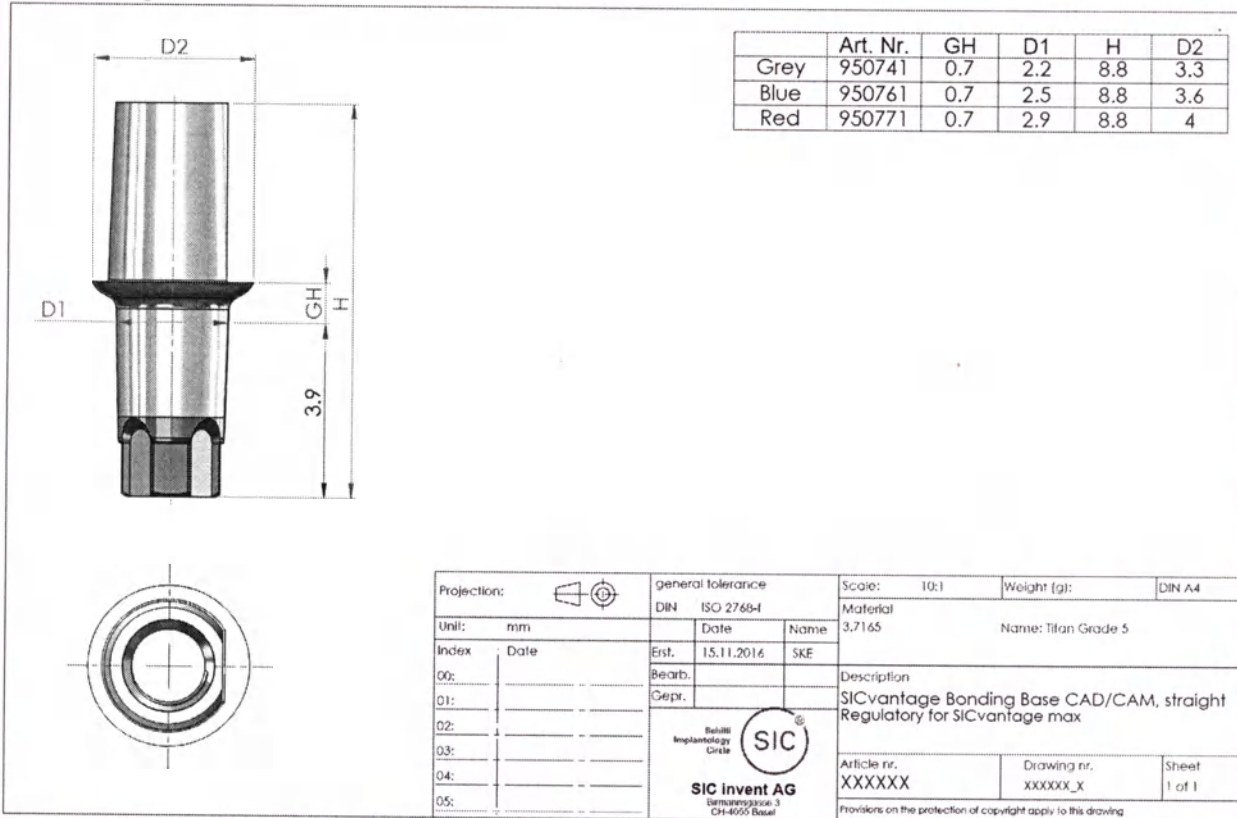


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5		
Индекс	Дата	Созд.	15.11.2016			
			SKE	Описание: SICvantage Bonding Base CAD/CAM, straight, Регулятор для SICvantage max		
00:	Редак.					
01:	Пров.			Артикул №: Чертеж №: Лист 1 из 1		
02:						
03:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
04:						
05:						
SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель						

	артикул	GH	D1	H	D2
серый	950741	0.7	2.2	8.8	3.3
голубой	950761	0.7	2.5	8.8	3.6
красный	950771	0.7	2.9	8.8	4

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross.

Чертеж титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM, straight, GH 0.3 mm, for bridgework – серый, голубой, красный

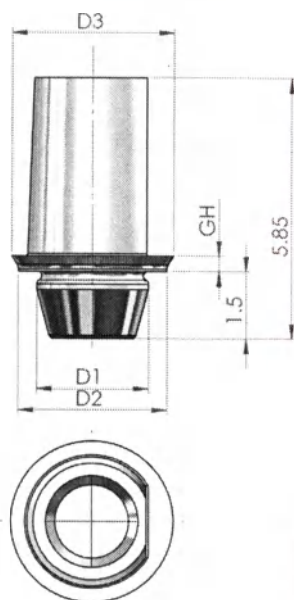

	Art. Nr.	GH	D1	D2	D3
Grey	950742	0.3	2.18	2.6	3.3
Blue	950762	0.3	2.48	3.3	3.6
Red	950772	0.3	2.88	3.5	4


Projection:		general tolerance	Scale: 10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm		DIN ISO 2768-f			
Index	Date	Ensl. 15.11.2016	Name	Material 3.7165	Name: Titan Grade 5
00:		Bearb.		Description	
01:		Gepr.		SICvantage Bonding Base CAD/CAM, bridge	
02:				Regulatory for SICvantage max	
03:				Article nr. XXXXXX	Drawing nr. XXXXXX_X
04:					Sheet 1 of 1
05:					Provisions on the protection of copyright apply to this drawing

Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4	
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5		
Индекс	Дата	Созд.	15.11.2016	SKE			
00:		Редак.			Описание: SICvantage Bonding Base CAD/CAM, bridge, Регулятор для SICvantage max		
01:		Пров.					
02:		SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:							
04:							
05:							
					К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

	артикул	GH	D1	D2	D3
серый	950742	0.3	2.18	2.6	3.3
голубой	950762	0.3	2.48	3.3	3.6
красный	950772	0.3	2.88	3.5	4

Геометрия соединения: Axial Center Cone.

Чертёж титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM, 15° angle, GH 1.0 mm – серый, голубой, красный

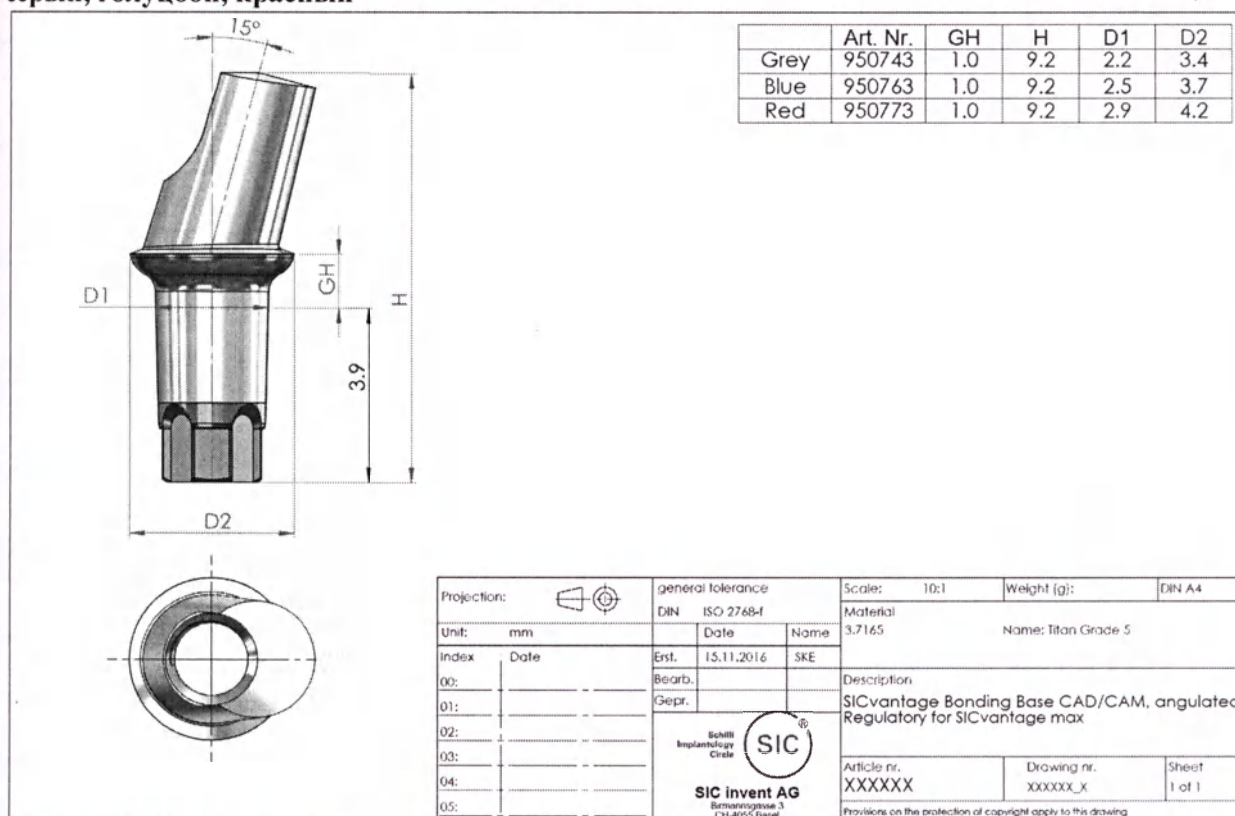


Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4		
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5			
Индекс	Дата	Созд.	15.11.2016	SKE				
00:			Редак.		Описание: SICvantage Bonding Base CAD/CAM, angulated, Регулятор для SICvantage max			
01:			Пров.					
02:			SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель		Артикул №:	Чертеж №:	Лист	
03:							1 из 1	
04:					К данному чертежу применимы положения об авторских правах			
05:								

	артикул	GH	H	D1	D2
серый	950743	1.0	9.2	2.2	3.4
голубой	950763	1.0	9.2	2.5	3.7
красный	950773	1.0	9.2	2.9	4.2

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross.

Чертеж титановое основание SICvantage Bonding Base CAD/CAM, straight, CEREC – серый, голубой, красный

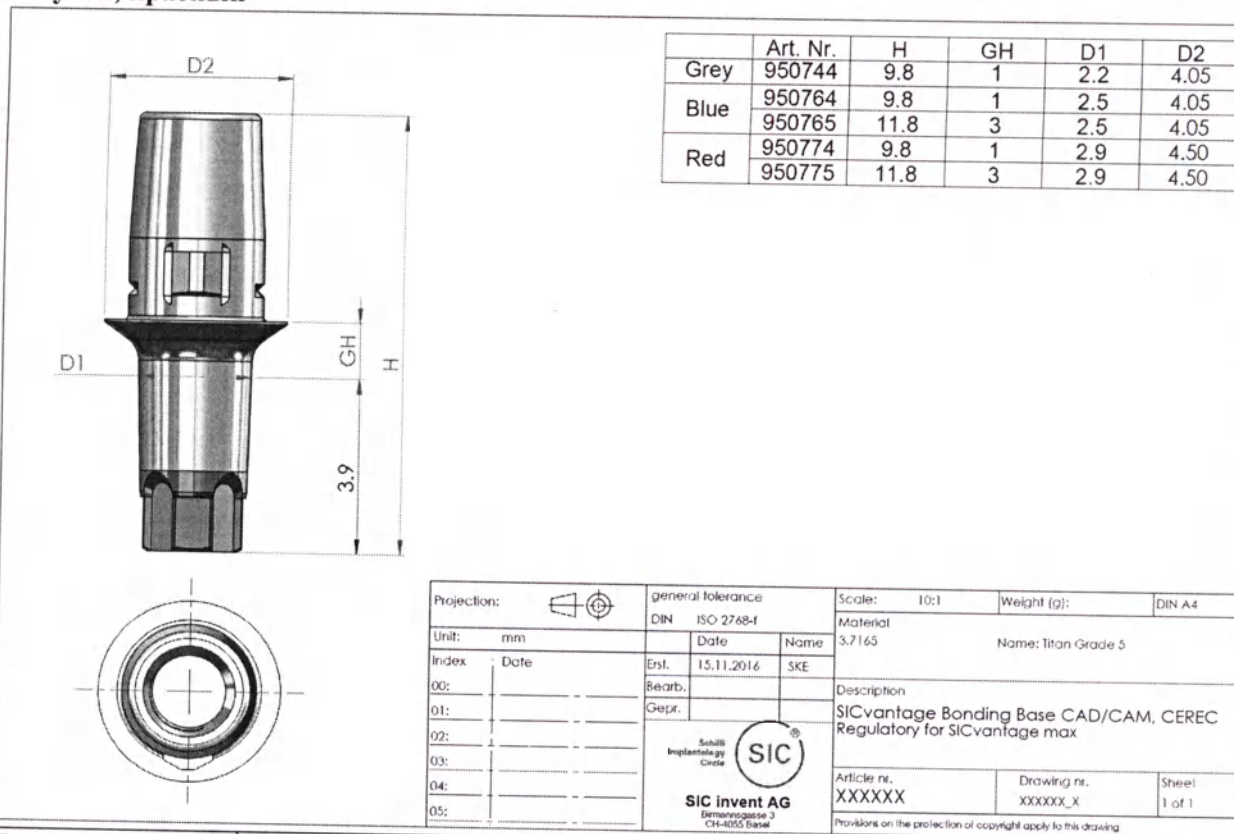


Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5		
Индекс	Дата	Созд.	15.11.2016	SKE			
00:		Редак.			Описание: SICvantage Bonding Base CAD/CAM, CEREC, Регулятор для SICvantage max		
01:		Пров.					
02:							
03:							
04:		SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
05:							1 из 1
					К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

	артикул	H	GH	D1	D2
серый	950744	9.8	1	2.2	4.05
голубой	950764	9.8	1	2.5	4.05
	950765	11.8	3	2.5	4.05
красный	950774	9.8	1	2.9	4.50
	950775	11.8	3	2.9	4.50

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross

Скан-адаптеры:

Чертёж скан-адаптер SIC Scan Adapter Ø 3.3 mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments


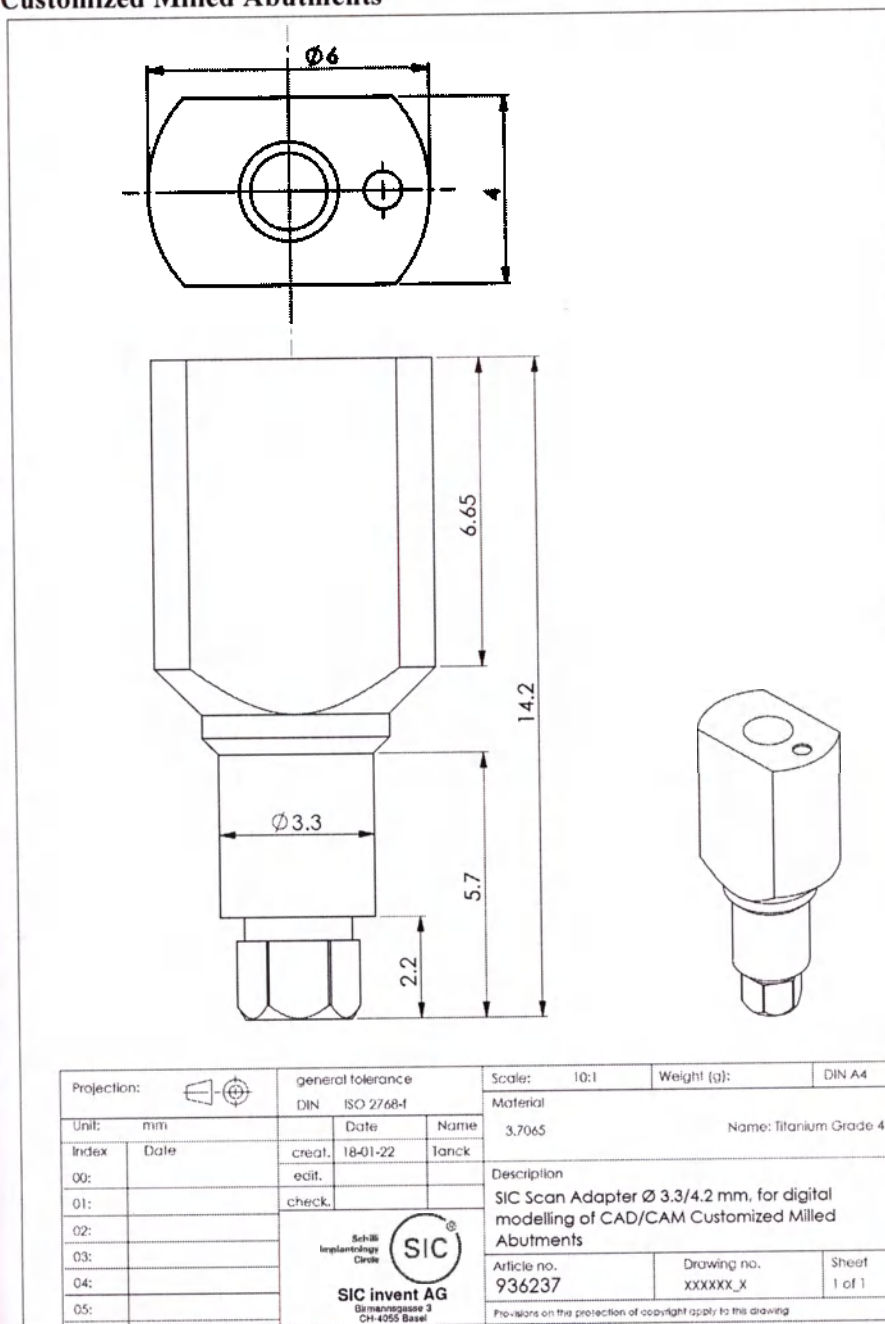


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7065 Наименование: Титан марки 4		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:		Редак.		Описание: SIC Scan Adapter Ø 3.3 mm, CEREC, for digital modelling of CAD/CAM Customized Milled Abutments		
01:		Пров.				
02:						
03:						
04:		SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель		Артикул №: 936237	Чертеж №:	Лист 1 из 1
05:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

Геометрия соединения: Hex 2.3 mm

Чертеж скан-адаптер SICvantage Scan Adapter, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments: серый, голубой, красный

Art. no.	D1	D2	D3	L1	L2	Color Marking
950801	∅ 5	∅ 3.0	∅ 2.6	3	7.00	grey
950802	∅ 6	∅ 3.3	∅ 2.9	4	6.65	blue
950803	∅ 6	∅ 3.3	∅ 3.3	4	6.65	red

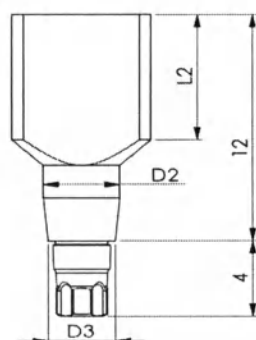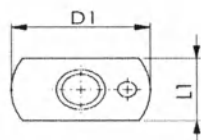

Projection:		general tolerance	DIN	ISO 2768-f	Scale:	5:1	Weight (g):	DIN A4
Unit:	mm	Date		Name	Material	3.7065	Name:	Titanium Grade 4
Index	Date	creat.	22-01-18	Tanck	Description	SICvantage Scan Adapter, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments		
00:		edit.			Article no.	XXXXXX	Drawing no.	XXXXXX_X
01:		check:			Sheet			1 of 1
02:					Provisions on the protection of copyright apply to this drawing			
03:								
04:								
05:								


Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4	
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7065 Наименование: Титан марки 4		
Индекс	Дата	Созд.	22-01-18	Tanck			
00:		Редак.			Описание: SICvantage Scan Adapter, for digital modelling of CAD/CAM Milled Abutments		
01:		Пров.					
02:							
03:		SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:							
05:							
					К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

артикул	D1	D2	D3	L1	L2	цвет
950801	∅ 5	∅ 3.0	∅ 2.6	3	7.00	серый
950802	∅ 6	∅ 3.3	∅ 2.9	4	6.65	голубой
950803	∅ 6	∅ 3.3	∅ 3.3	4	6.65	красный

Геометрия соединения: Morse Taper and Swiss Cross

Формирователи:

Чертеж формирователь SICvantage Gingiva Shaper concave: для передних зубов и боковых зубов

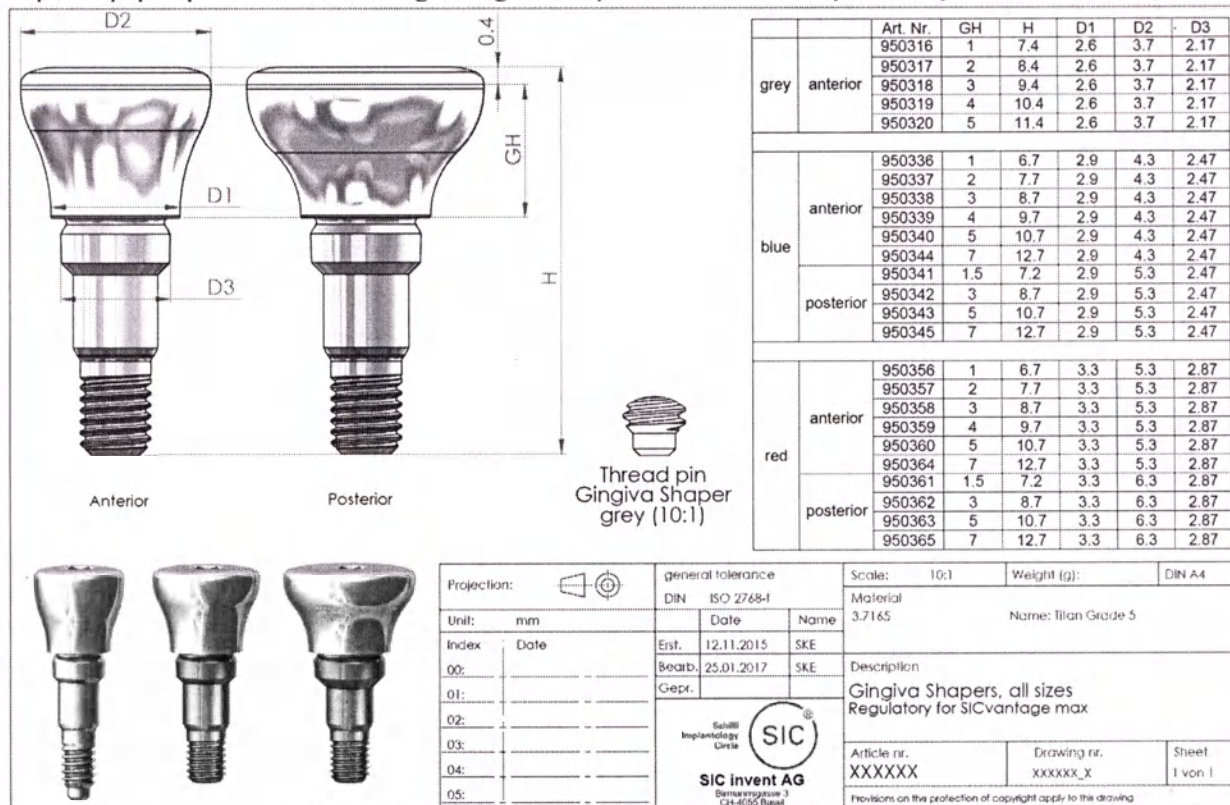


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Титан марки 5		
Индекс	Дата	Созд.	12.11.2015			
00:	Редак.	25.01.2017	SKE	Описание: Gingiva Shaper, все размеры Регулятор для SICvantage max		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист 1 из 1
03:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
04:						
05:						

		артикул	GH	H	D1	D2	D3
серый	передний	950316	1	7.4	2.6	3.7	2.17
		950317	2	8.4	2.6	3.7	2.17
		950318	3	9.4	2.6	3.7	2.17
		950319	4	10.4	2.6	3.7	2.17
		950320	5	11.4	2.6	3.7	2.17
голубой	передний	950336	1	6.7	2.9	4.3	2.47
		950337	2	7.7	2.9	4.3	2.47
		950338	3	8.7	2.9	4.3	2.47
		950339	4	9.7	2.9	4.3	2.47
		950340	5	10.7	2.9	4.3	2.47
	боковой	950344	7	12.7	2.9	4.3	2.47
		950341	1.5	7.2	2.9	5.3	2.47
		950342	3	8.7	2.9	5.3	2.47
		950343	5	10.7	2.9	5.3	2.47
		950345	7	12.7	2.9	5.3	2.47
красный	передний	950356	1	6.7	3.3	5.3	2.87
		950357	2	7.7	3.3	5.3	2.87
		950358	3	8.7	3.3	5.3	2.87
		950359	4	9.7	3.3	5.3	2.87
		950360	5	10.7	3.3	5.3	2.87
	боковой	950364	7	12.7	3.3	5.3	2.87
		950361	1.5	7.2	3.3	6.3	2.87
		950362	3	8.7	3.3	6.3	2.87
		950363	5	10.7	3.3	6.3	2.87
		950365	7	12.7	3.3	6.3	2.87

Геометрия соединения: Morse Taper.

Чертеж формирователь SICvantage TempCap, Gingiva Shaper for Insertion Post

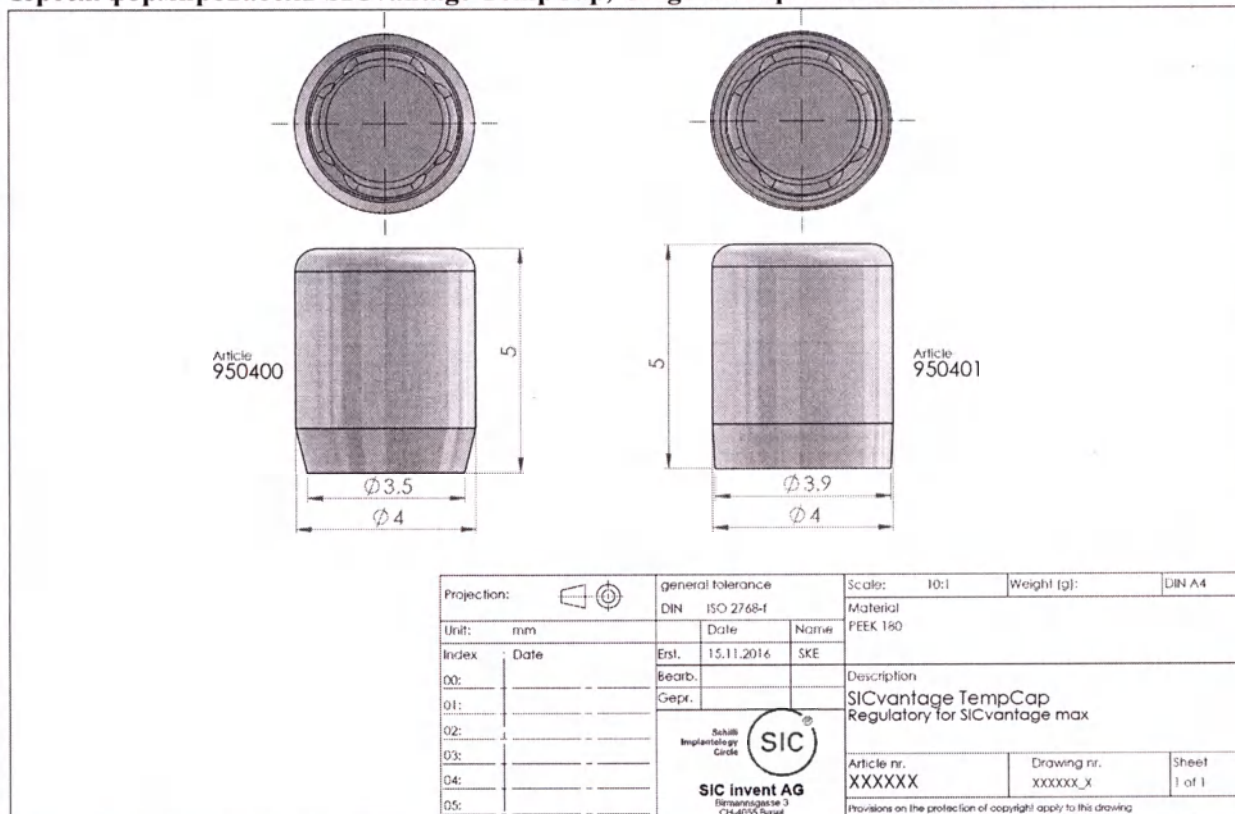




Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал PEEK 180		
Индекс	Дата	Созд.	15.11.2015			
			SKE	Описание: SICvantage TempCap Регулятор для SICvantage max		
00:	Редак.					
01:	Пров.			Артикул №:		
02:						
03:				Чертеж №:		
04:						
05:				Лист 1 из 1		


SIC invent AG
Birmansgasse 3
CH-4055 Basel

К данному чертежу применимы положения об авторских правах

Геометрия соединения: Insertion Post

Чертеж формирователь SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click

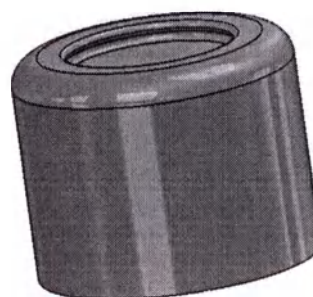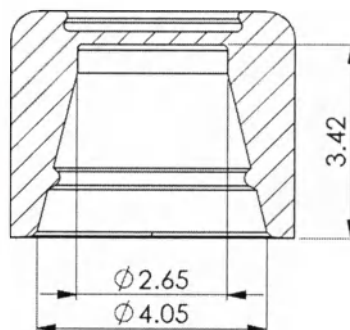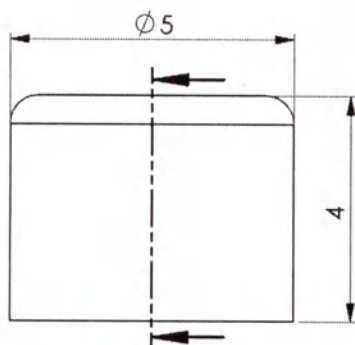

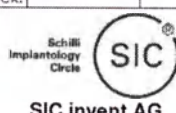
Projection: 		general tolerance DIN ISO 2768-f		Scale: 10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm		Date	Name	Material PEEK_Classix_180		
Index	Date	creat.	2017-09-11	Tanck	Description SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click	
00:		edit.				
01:		check.				
02:						
03:						
04:					Article no. 950731	Drawing no. XXXXXX_X
05:						Sheet 1 of 1
 SIC invent AG Birmanngasse 3 CH-4055 Basel				Provisions on the protection of copyright apply to this drawing		

Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал PEEK_Classix_180		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:		Редак.		Описание: SIC Gingiva Shaper "Safe on Four" with Click		
01:		Пров.				
02:				Артикул №: 950731		
03:						
04:						
05:				Чертеж №: Лист 1 из 1		
SIC invent AG Бирмансгассе 3 СУ-4055 Базель				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

Геометрия соединения: Cone "Safe on Four"

Трансферы:


Чертеж трансфер SICvantage Transfer Abutment, reposition: цвета трансферов серый, голубой, красный

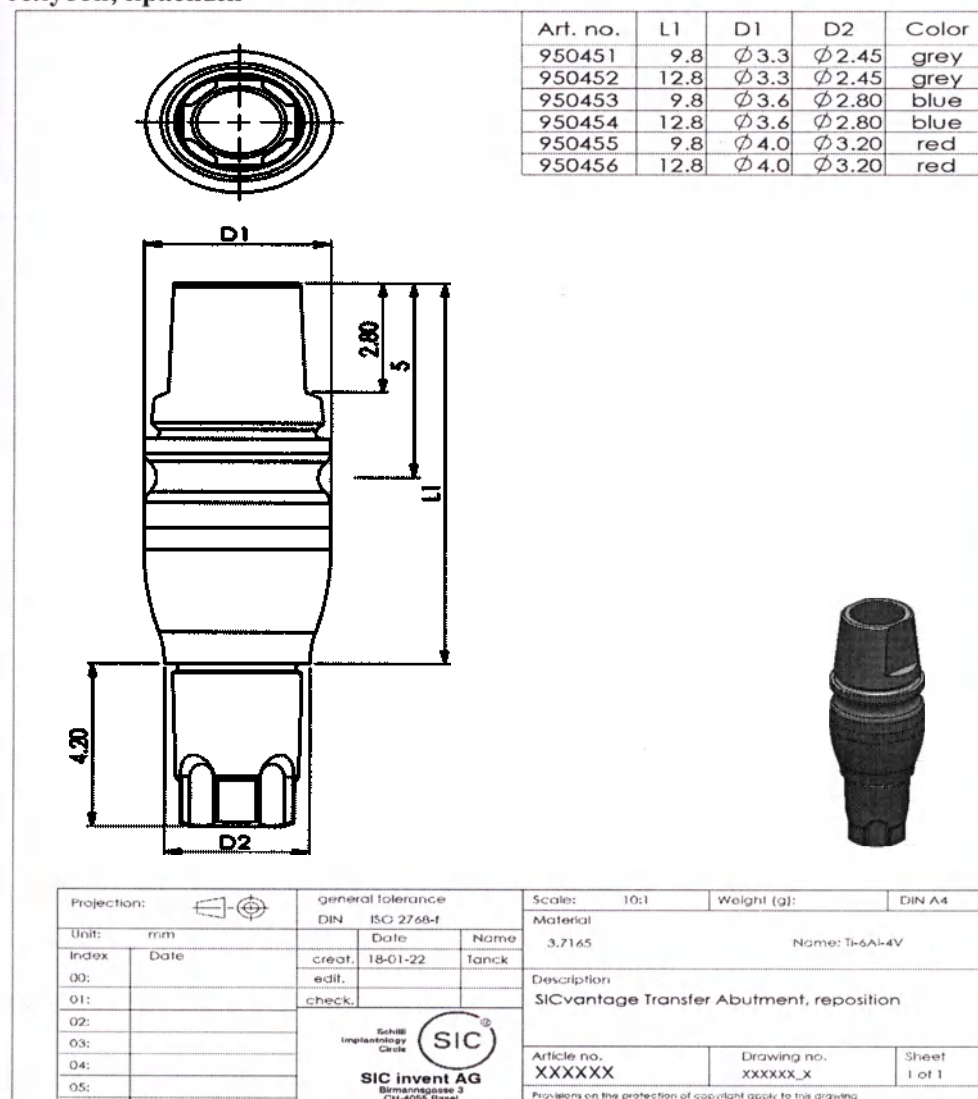

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм	Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V			
Индекс	Дата	Созд.				
00:	Ред.	18-01-22	Tanck	Описание: SICvantage Transfer Abutment, reposition		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4005 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист 1 из 1
03:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
04:						
05:						

артикул	L1	D1	D2	цвет
950451	9.8	Ø 3.3	Ø 2.45	серый
950452	12.8	Ø 3.3	Ø 2.45	серый
950453	9.8	Ø 3.6	Ø 2.80	голубой
950454	12.8	Ø 3.6	Ø 2.80	голубой
950455	9.8	Ø 4.0	Ø 3.20	красный
950456	12.8	Ø 4.0	Ø 3.20	красный

Чертеж трансфер SICvantage Transfer Abutment grey, Open Tray Technique, short

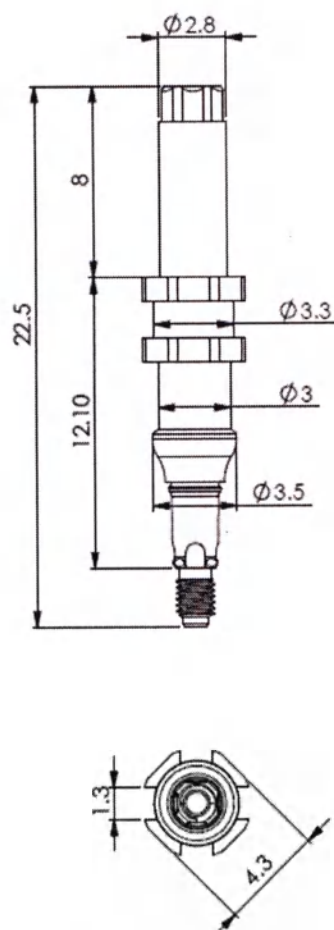


Projection:		general tolerance	DIN ISO 2768-f	Scale:	5:1	Weight (g):	DIN A4
Unit:	mm	Date	Name	Material	3.7165	Name:	Ti-6Al-4V
Index	Date	creat.	18-02-05	Tanck			
00:		edit.					
01:		check.					
02:							
03:							
04:							
05:							



Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V	
Индекс	Дата	Созд.	18-02-05	Tanck		
00:			Редак.		Описание: SICvantage Transfer Abutment grey, Open Tray Technique, short	
01:			Пров.			
02:					Артикул №: 950471 Чертеж №: Xxxxxxx_x Лист 1 из 1 К данному чертежу применимы положения об авторских правах	
03:						
04:						
05:						
		SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель				


Чертеж трансфер SICvantage Transfer Abutment, Open Tray Technique, for bridgework-голубой, красный

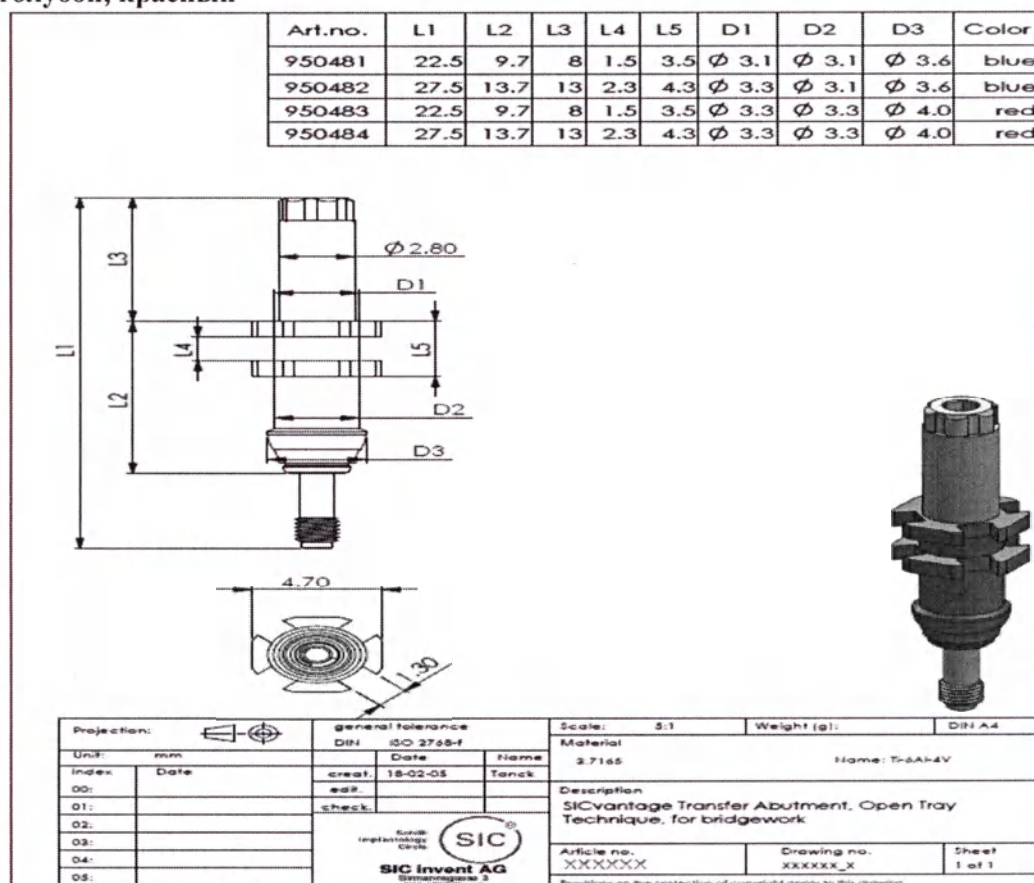

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V		
Индекс	Дата	Созд.	Танк			
00:	Редак.			Описание: SICvantage Transfer Abutment, Open Tray Technique, for bridgework		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:				xxxxxx	xxxxxx_x	1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						

артикул	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	D3	цвет
950481	22.5	9.7	8	1.5	3.5	Ø 3.1	Ø 3.1	Ø 3.6	голубой
950482	27.5	13.7	13	2.3	4.3	Ø 3.3	Ø 3.1	Ø 3.6	голубой
950483	22.5	9.7	8	1.5	3.5	Ø 3.3	Ø 3.3	Ø 4.0	красный
950484	27.5	13.7	13	2.3	4.3	Ø 3.3	Ø 3.3	Ø 4.0	красный

Чертеж трансфер SICvantage Transfer Abutment, Open Tray Technique – голубой, красный

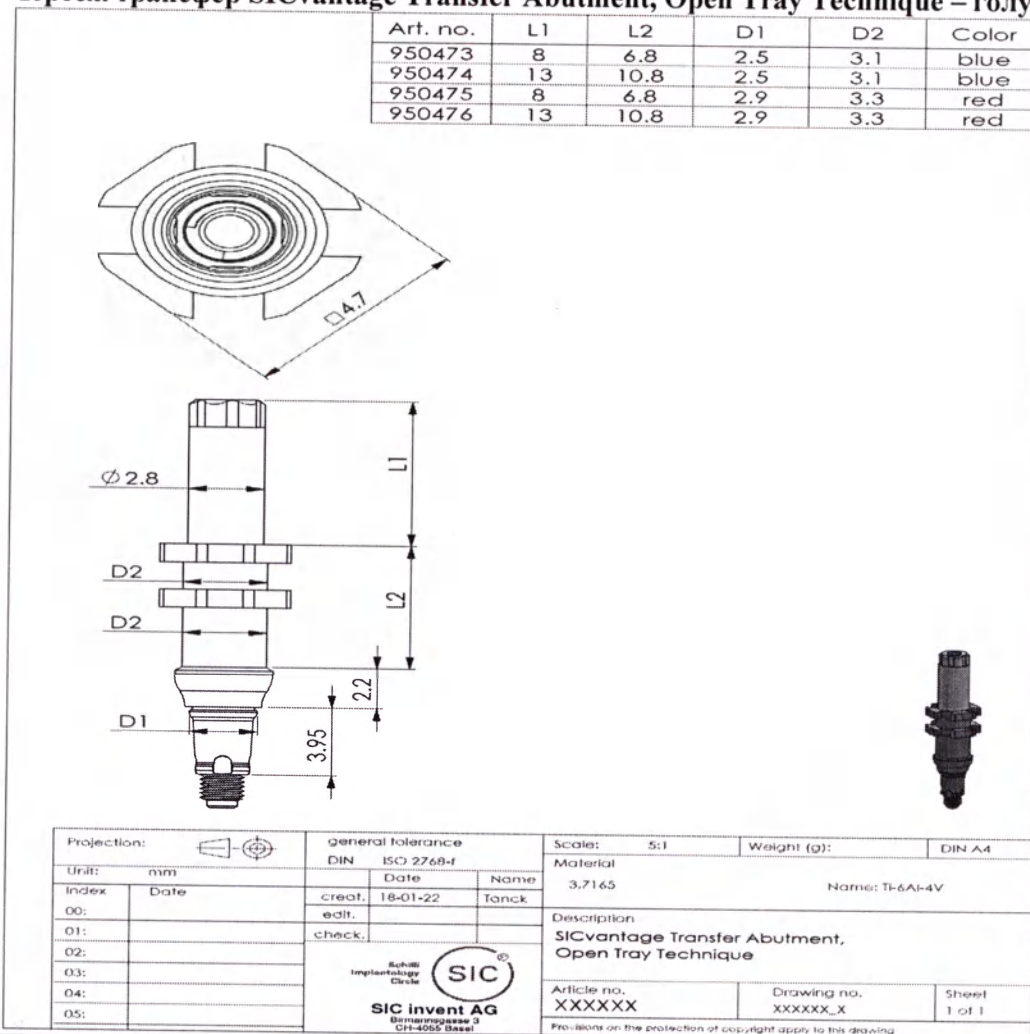


Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:		Редак.		Описание: SICvantage Transfer Abutment, Open Tray Technique		
01:		Пров.				
02:				SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель		
03:						
04:				Артикул №:	Чертеж №:	Лист
05:						1 из 1
				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

артикул	L1	L2	D1	D2	цвет
950473	8	6.8	2.5	3.1	голубой
950474	13	10.8	2.5	3.1	голубой
950475	8	6.8	2.9	3.3	красный
950476	13	10.8	2.9	3.3	красный

Геометрия соединения: Cone and Swiss Cross


Чертеж трансфер SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black

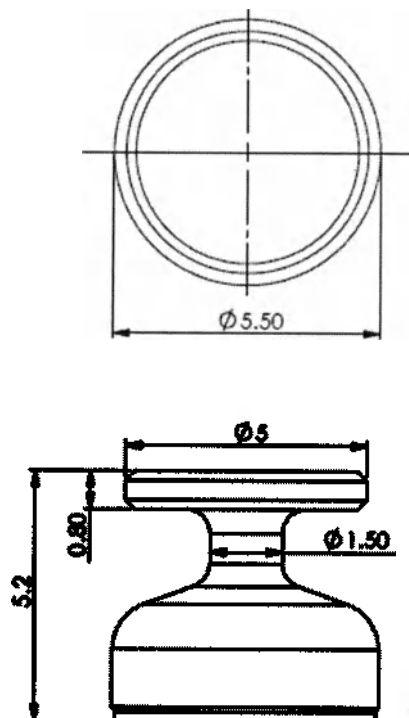

Projection:		general tolerance DIN ISO 2768-f		Scale: 10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm		Date	Name	Material 3.7165 Name: Ti-6Al-4V		
Index	Date	creat.	Tanck	Description SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black		
00:		edit.				
01:		check				
02:						
03:						
04:				Article no. 951262	Drawing no. XXXXXX_X	Sheet 1 of 1
05:				Provisions on the protection of copyright apply to this drawing		

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:		Редак.		Описание: SIC LocFix Impression Post incl. Processing Male, black		
01:		Пров.				
02:				Артикул №: 951262 Чертеж №: xxxxxx_x Лист 1 из 1		
03:						
04:						
05:				SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель		

Чертеж трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four", Open Tray Technique (incl. SIC Fixation Screw 16.0 mm)


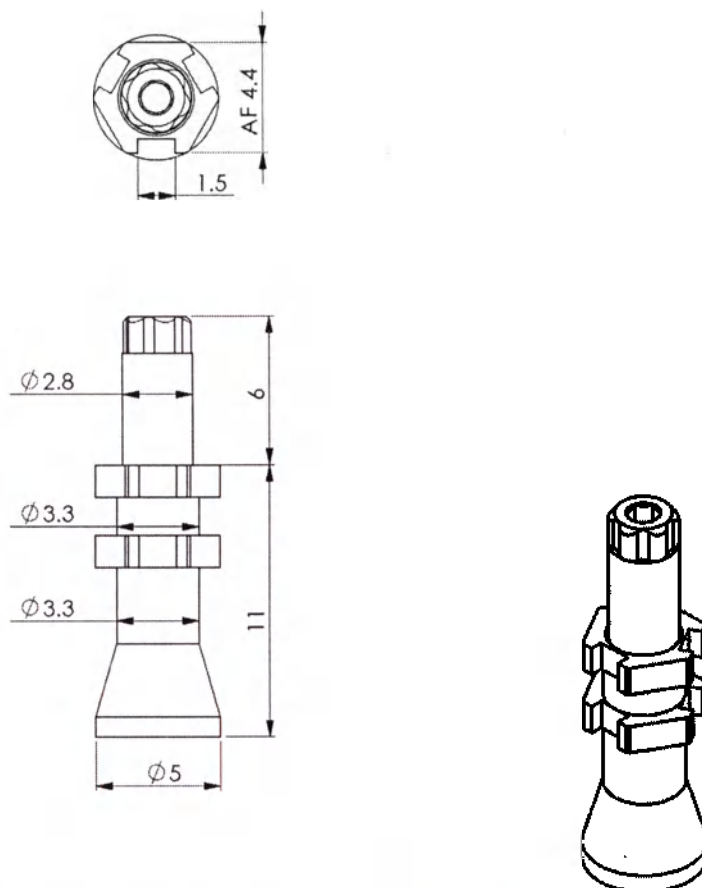


Projection:		general tolerance	Scale: 5:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm		DIN ISO 2768-f	Material	Name: Ti-6Al-4V	
Index	Date	creat.	18-01-22	Tanck	
00:		edit.			
01:		check.			
02:					
03:					
04:					
05:					
 SIC invent AG Birmanngasse 3 CH-4055 Basel			Article no.	Drawing no.	Sheet
			936275	XXXXXX_X	1 of 1
Provisions on the protection of copyright apply to this drawing					

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 5:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наименование: Ti-6Al-4V		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:	Редак.			Описание: SIC Transfer Abutment "Safe on Four", Open Tray Technique (incl. SIC Fixation Screw 16.0 mm)		
01:	Пров.					
02:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
03:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 СУ-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:				936275		1 из 1
05:						

Геометрия соединения: Cone "Safe on Four"


Чертеж трансфер SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click

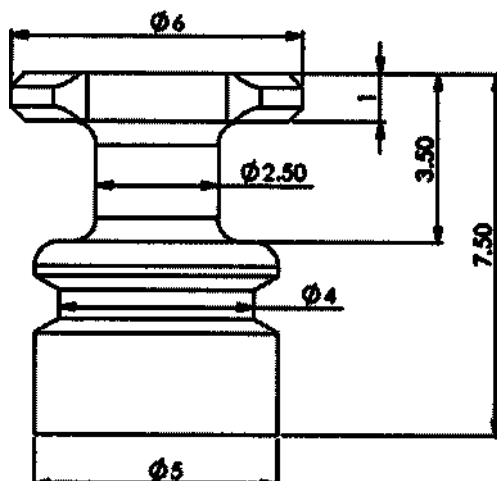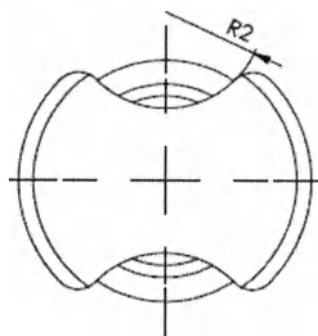

Projection:		general tolerance	Scale:	10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit:	mm	DIN ISO 2768-f	Material	POM		
Index	Date	creat.	18-01-22	Name	Tanck	
00:		ed.		Description	SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click	
01:		check		Article no.	950732	Sheet 1 of 1
02:				Drawing no.	XXXXXX_X	
03:				Provisions on the protection of copyright apply to this drawing		
04:						
05:						

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал POM		
Индекс	Дата	Созд.	Tanck			
00:		Редак.		Описание: SIC Transfer Abutment "Safe on Four" with Click		
01:		Пров.				
02:		SIC invent AG Birmanngasse 3 CH-4055 Базель		Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:				950732		1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						


Чертеж аналог имплантата SICvantage Lab Implant:серый, голубой, красный

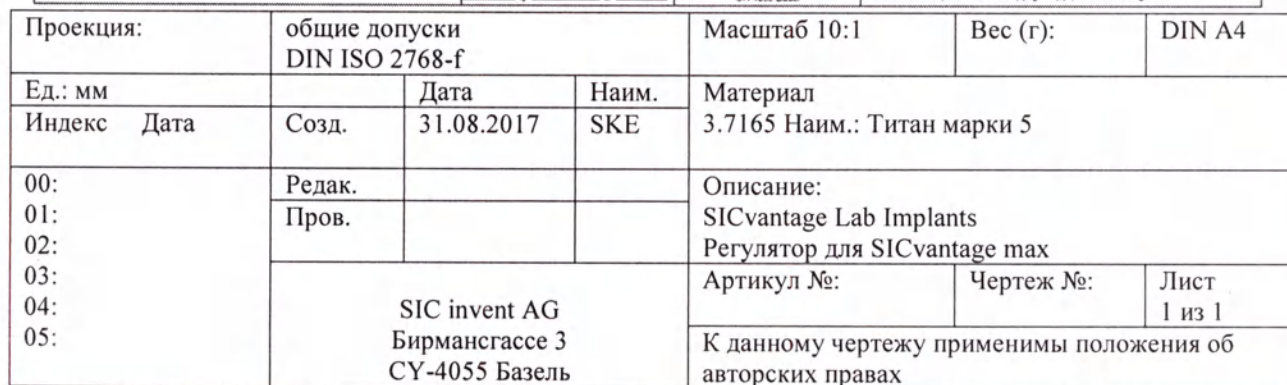

цвет	артикул	D1	D2	D3
серый	950504	3.0	2.8	2.2
голубой	950505	3.7	3.3	2.5
красный	950506	4.2	3.3	2.9

Геометрия соединения: Cone and Swiss Cross

Чертеж аналог имплантата SIC LocFix Lab Implant:

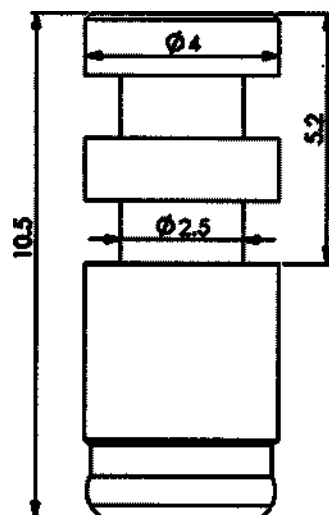


Projection:			general tolerance		Scale:	10:1	Weight (g):	DIN A4
			DIN ISO 2768-f		Material			
Unit:	mm		Date	Name	2.7165		Name: Ti-6Al-4V	
Index	Date		creat.	18-02-05	Tanck			
00:			edit.		Description			
01:			check.		SIC LocFix Lab Implant			
02:			Schill Implantology Circle SIC ® SIC invent AG Immanngasse 3 63440 Gießen		Article no.		Drawing no.	Sheet
03:					951263		XXXXXX_X	1 of 1
04:								
05:								
Provisions on the protection of copyright apply to this drawing								

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Ti-6Al-4V		
Индекс	Дата	Созд.	SKE			
00:	Редак.			Описание: SIC LocFix Lab Implant		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:				951263	xxxxxx_x	1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						


Винты абатмента для дентального имплантата марки SIC:

Чертеж винт абатмента SICvantage Fixation Screw for prosthetics in grey

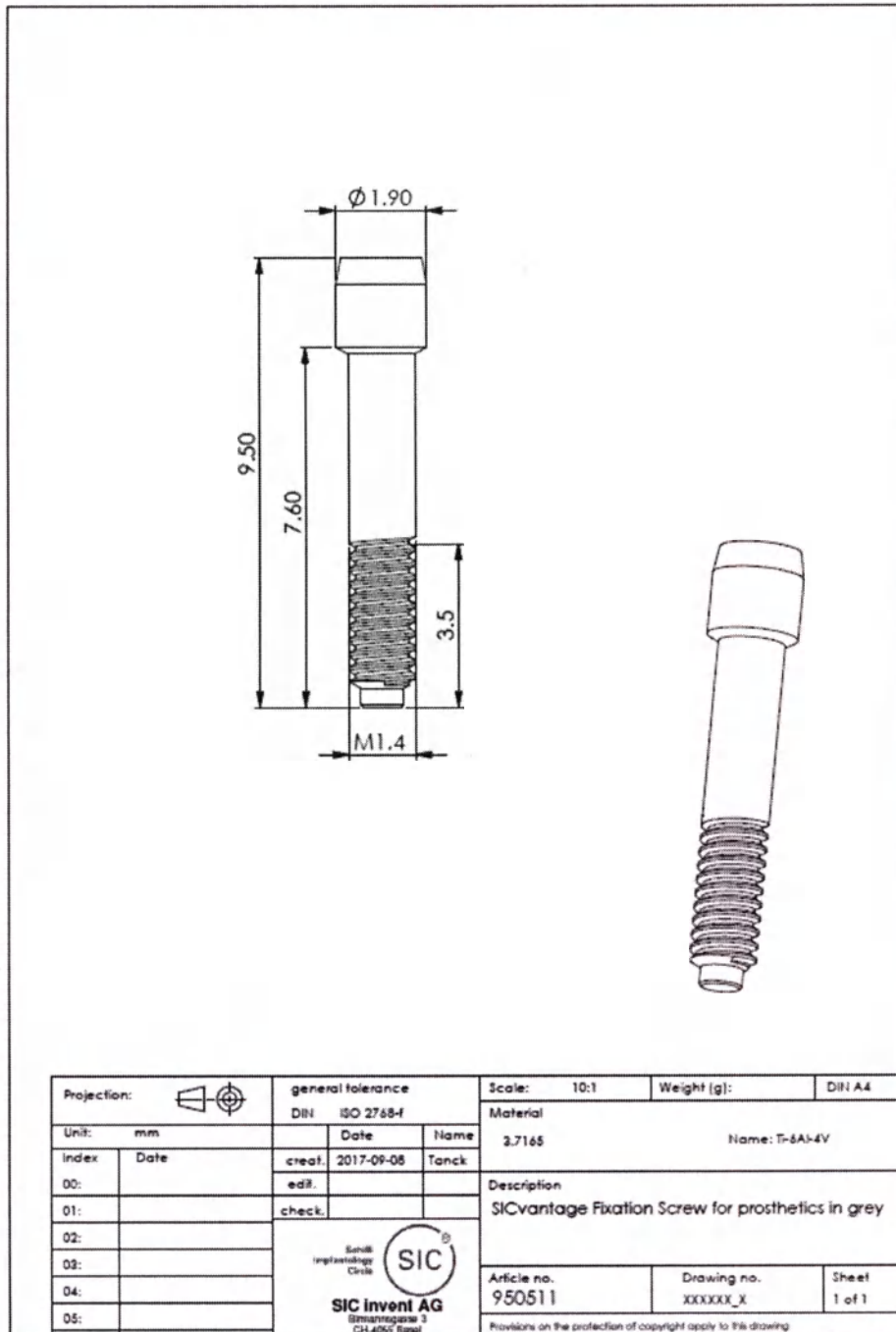

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал		
Индекс	Дата	Созд.	SKE	3.7165 Наим.: Ti-6Al-4V		
00:	Редак.			Описание: SICvantage Fixation Screw for prosthetics in grey		
01:	Пров.					
02:						
03:	SIC invent AG Бирмангассе 3 СУ-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:				950511	xxxxxx_x	1 из 1
05:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

Чертеж винт абатмента SICvantage Fixation Screw, short

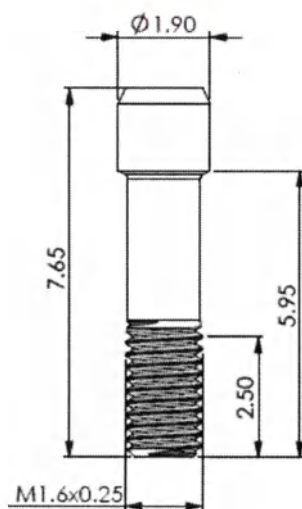


Projection:				general tolerance		Scale: 10:1		Weight [g]:		DIN A4	
Unit: mm				DIN ISO 2768-f		Material					
Index		Date		creat. 2017-09-08		Name: Ti-6Al-4V					
00:				ed#:		Tanck					
01:				check				Description			
02:				 SIC invent AG Birmanngasse 3 CH-4055 Basel		SICvantage Fixation Screw, short					
03:											
04:											
05:											
				Article no.		950513		Drawing no.		XXXXXX_X	
				Sheet		1 of 1					
Provisions on the protection of copyright apply to this drawing											

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал 3.7165 Наим.: Ti-6Al-4V		
Индекс	Дата	Созд.	2017-09-08			
			SKE			
00:	Редак.			Описание: SICvantage Fixation Screw, short		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:				950513	xxxxxx_x	1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						

Колпачки:


Чертёж колпачок SICvantage Impression Cap for Standard Abutments- серый, голубой, красный

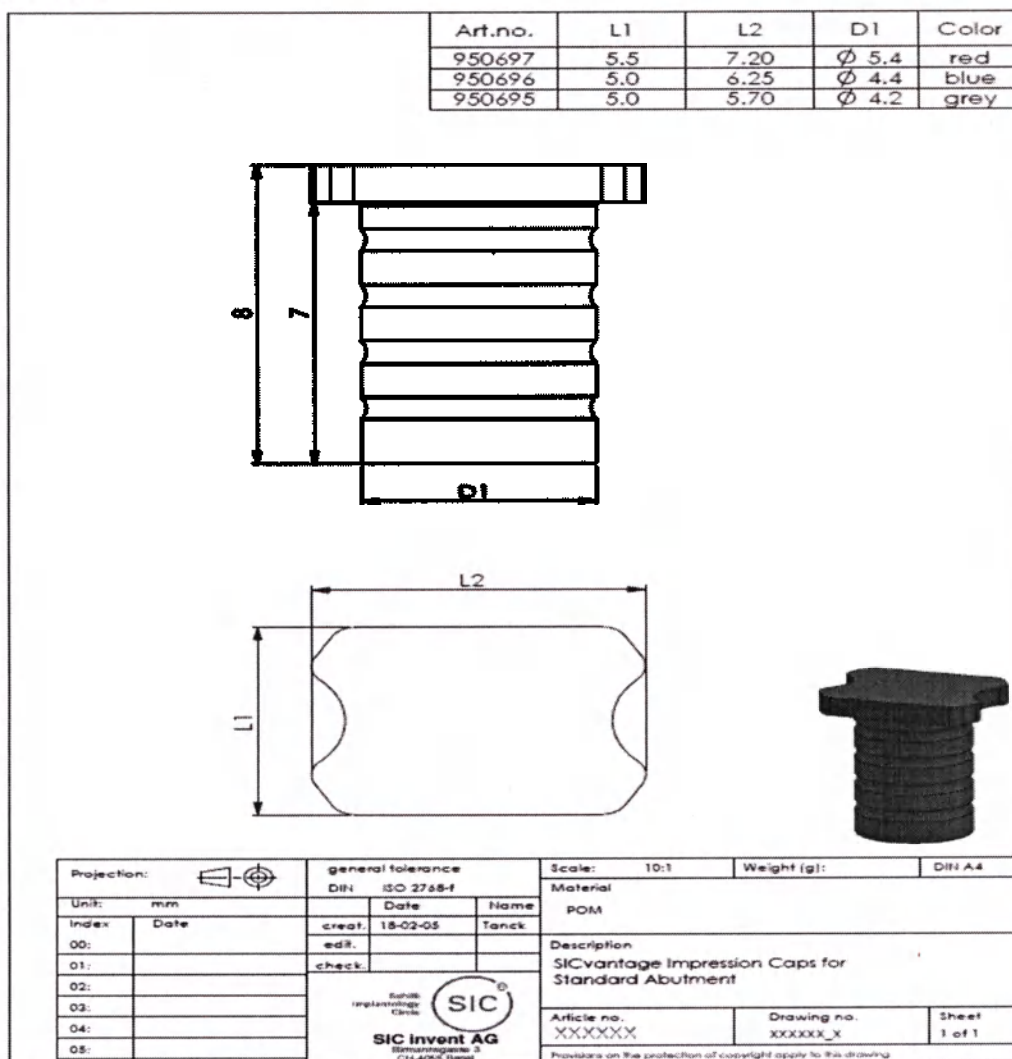

Проекция:		общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4	
Ед.: мм			Дата	Наим.	Материал POM		
Индекс	Дата	Созд.	18-02-05	SKE			
00:		Редак.			Описание: SICvantage Impression Cap for Standard Abutments		
01:		Пров.					
02:							
03:		SIC invent AG Бирмангассе 3 СУ-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
04:					xxxxx	xxxxxx_x	1 из 1
05:					К данному чертежу применимы положения об авторских правах		

артикул	L1	L2	D1	цвет
950697	5.5	7.20	Ø 5.4	серый
950696	5.0	6.25	Ø 4.4	голубой
950695	5.0	5.70	Ø 4.2	красный


Чертёж колпачок SIC LocFix Denture Cap incl. Processing Male, black

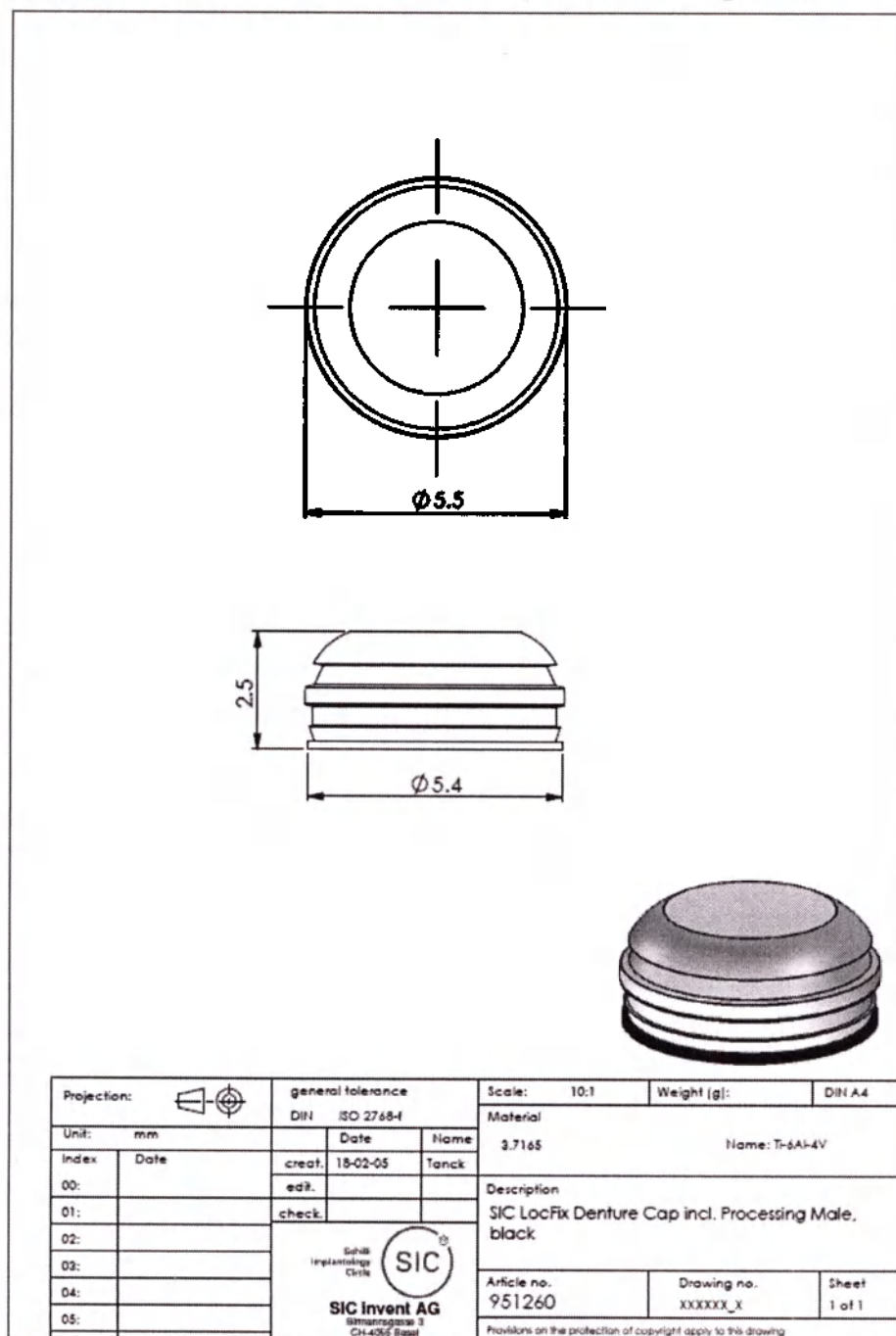

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f	Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
-----------	---------------------------------	--------------	----------	--------

Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал			
Индекс	Дата	Созд.	18-09-08	SKE	3.7165 Наим.: Ti-6Al-4V		
00:	Редак.			Описание:			
01:	Пров.			SIC LocFix Denture Cap incl. Processing Male, black			
02:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист	
03:				951260	xxxxxx x	1 из 1	
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах			
05:							


Чертёж колпачок SIC Transfer Caps with Click, 5 pieces

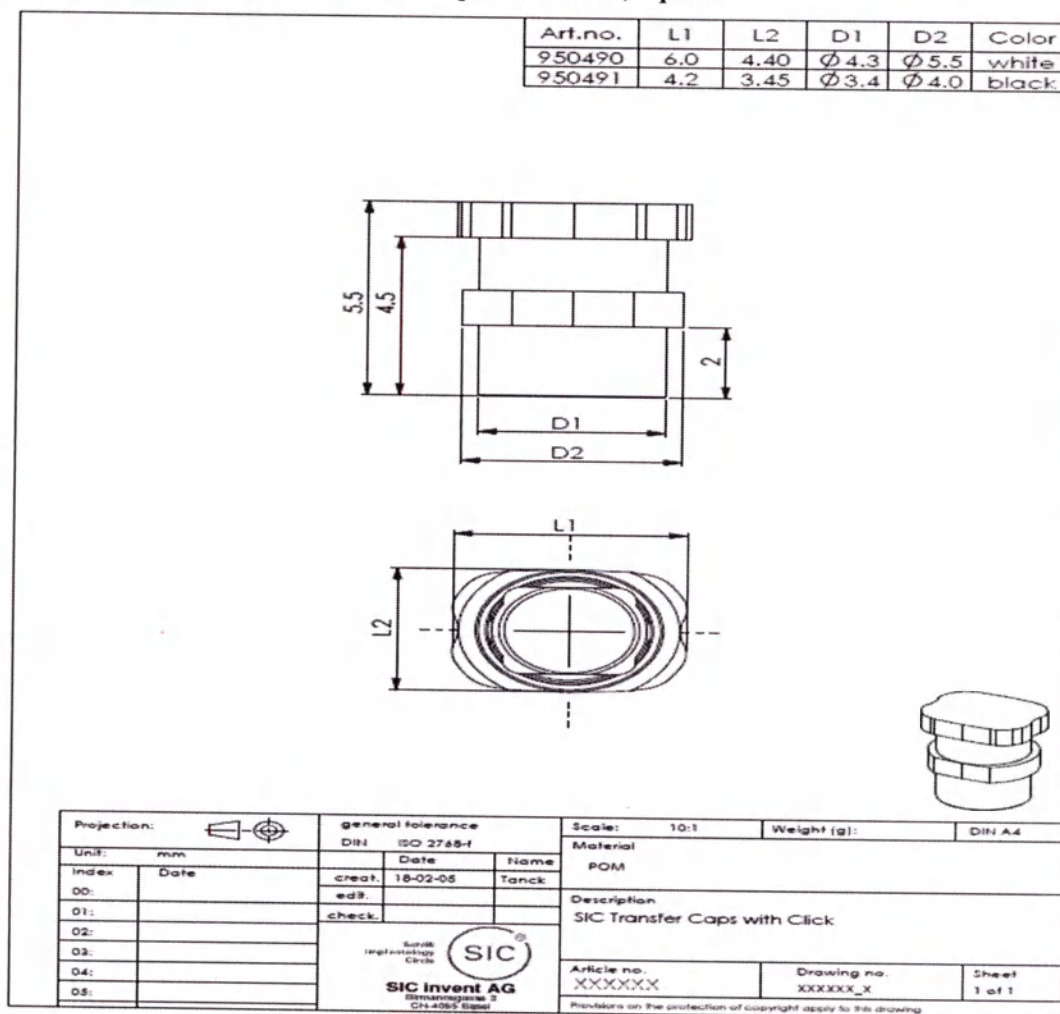

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал POM		
Индекс	Дата	Созд.	18-02-05			
00:	Редак.			Описание: SIC Transfer Caps with Click		
01:	Пров.					
02:	SIC invent AG Бирмансгассе 3 CH-4055 Базель			Артикул №:	Чертеж №:	Лист
03:				xxxxxx	xxxxxx_x	1 из 1
04:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
05:						

артикул	L1	L2	D1	D2	цвет
950490	6.0	4.40	Ø 4.3	Ø 5.5	белый
950491	4.2	3.45	Ø 3.4	Ø 4.0	чёрный



Матрицы к абатменту: прозрачные, розовые, голубые, зеленые, оранжевые, красные.
На чертеже красная, для всех остальных чертеж идентичен

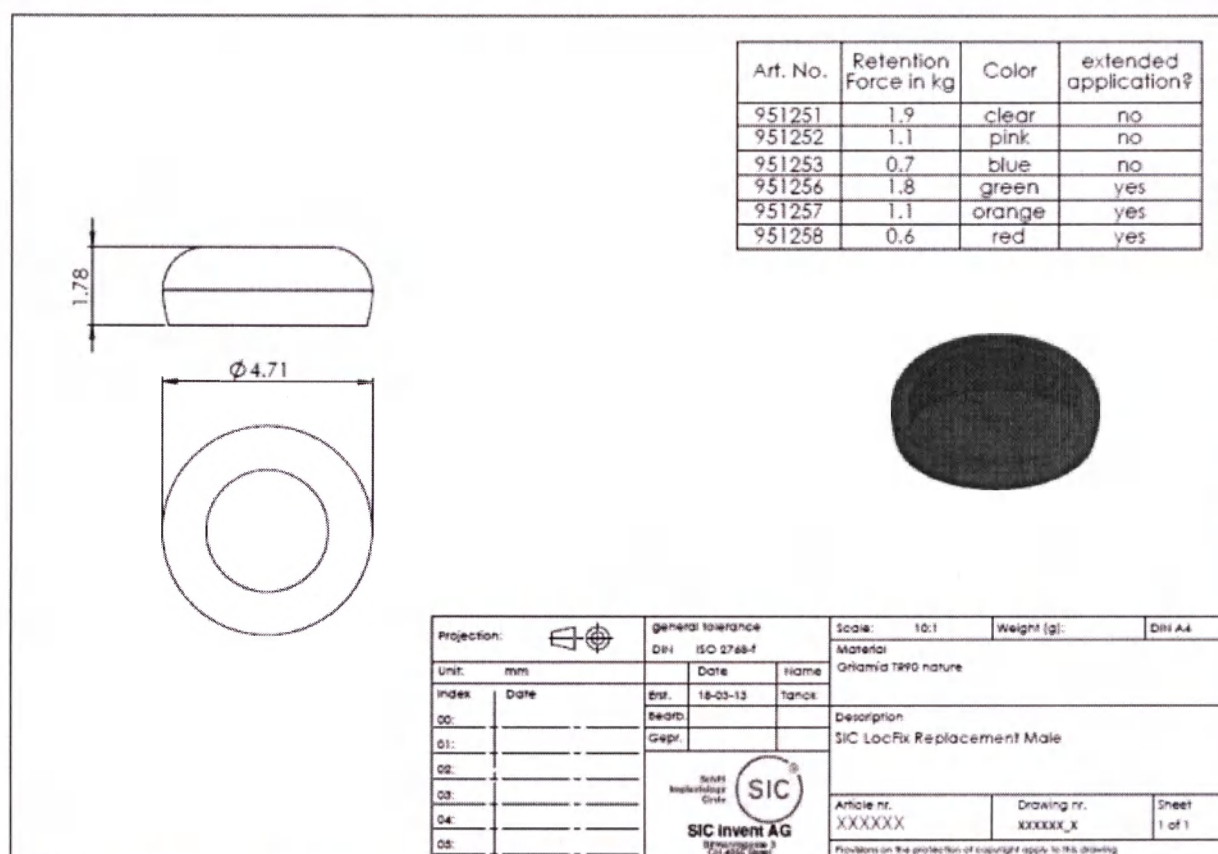

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f			Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал Griamid TR90 nature		
Индекс	Дата	Созд.	SKE			
00:		Редак.		Описание: SICLocFix Replacement Male		
01:		Пров.				
02:		SIC invent AG Бирмангассе 3 CH-4055 Базель		Артикул №:	Чертеж №:	Лист 1 из 1
03:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах		
04:						
05:						

артикул	удерживающее усилие	цвет	расширенные показания
951251	1.9	прозрачный	нет
951252	1.1	розовый	нет
951253	0.7	голубой	нет
951256	1.8	зелёный	да
951257	1.1	оранжевый	да
951258	0.6	красный	да

Чертеж кольцо изоляционное SIC LocFix Block-Out Ring

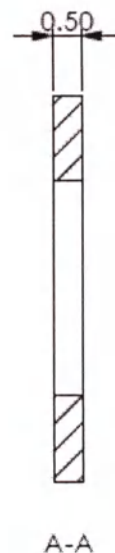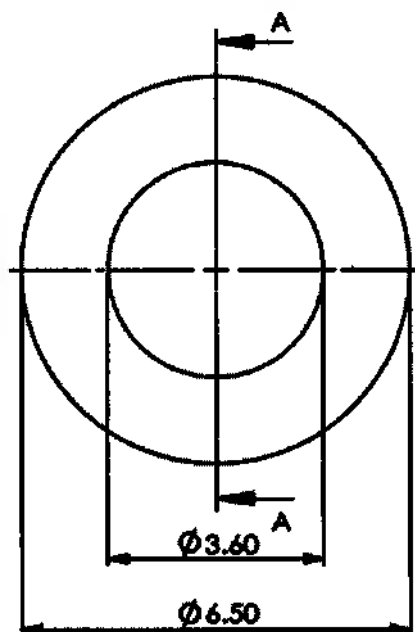

Projection:		general tolerance DIN ISO 2768-f		Scale: 10:1	Weight (g):	DIN A4
Unit: mm		Date	Name	Material XXXXXXXX Name: XXXXXXXXXXXX		
Index	Date	creat.	2018-06-11	Tanck	Description LocFix Block-Out Ring	
00:		edit.				
01:		check				
02:						
03:						
04:					Article nr. 951261	Drawing nr. XXXXXX_X
05:					Rev. XX	Sheet 1 of 1
 SIC invent AG Birmanngasse 3 CH-4055 Basel				Provisions on the protection of copyright apply to this drawing		

Проекция:	общие допуски DIN ISO 2768-f		Масштаб 10:1	Вес (г):	DIN A4
Ед.: мм		Дата	Наим.	Материал Name:	
Индекс	Дата	Созд.	2018-06-11		
00:		Редак.		Описание: SIC LocFix Block-Out Ring "	
01:		Пров.			
02:		SIC invent AG Бирмангассе 3 СУ-4055 Базель		Артикул №: 951261	Чертеж №: xxxxx x
03:				К данному чертежу применимы положения об авторских правах	
04:					
05:					
				Лист 1 из 1	

Перевод с немецкого и английского языков на русский язык

Штамп:

СИК инвент АГ
Бирманнсгассе 3
CH -4055 Базель

Шилли СИК
Имплантоложки
Сиркл

Телефон: +41 (0)61 260 24 60
Факс: +41 (0)61 261 39 68

www.sic-invent.com

«Утверждаю»

Управляющий Директор

Георг Шилли

«СИК инвент АГ», Швейцария

/подпись/

11 декабря 2018

Инструкция по эксплуатации
Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах марки SIC с
принадлежностями,
производства «SIC invent AG», Швейцария

Далее текст на русском языке.

Legalization

I, the undersigned, Dr. Felix Iselin, sworn notary public to Basel-Stadt (Switzerland), do hereby certify that the signature on the first page is that of **SIC invent AG**, a limited company under Swiss law, having its seat in Basel (Switzerland), affixed by Mr **Georg Hermann Schilli**, German citizen, domiciled in Binningen (Switzerland), acting as Chairman and Delegate of the Board of Directors with sole signatory power.

B a s e l, this 17th (seventeenth) day of December 2018 (two thousand and eighteen)

D. Felix Green,
Notes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Land Swiss Confederation, Canton of Basel-City
Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by
ist unterschrieben von

3. acting in the capacity of
in seiner Eigenschaft als
- Notary Public

4. bears the stamp/seal of Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der Iselin Felix


Certified / Bestätigt

5. at / in Basel 6. the / am 18.12.2018

7. by the **Legalisation Office of the Canton of Basel-City**
durch das **Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt**

8.  tax / Taxe CHF 20.00

- Stamp/see
Stempel/Seite
10. Signature **Jessica Lack**
Unterschrift

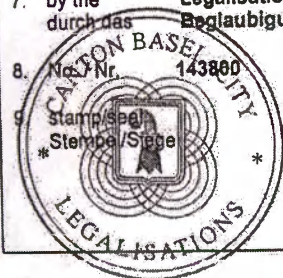

D. L. L.

Leg.Prot. 2018/ 702

Легализация

Нижеподписавшийся Др. Феликс Иселин, государственный нотариус в г.Базель (Швейцария) настоящим подтверждаю, что подписи на первой странице данного документа проставлены от имени **СИК инвент АГ**, компании с ограниченной ответственностью по законодательству Швейцарии, с местонахождением в г. Базель (Швейцария) господином Георгом Херманном **Шилли**, гражданином Германии, проживающим в Беннингене (Швейцария) действующим в качестве Председателя совета директоров и представителя совета директоров с правом единоличной подписи.

Базель, 17-е (семнадцатое) декабря 2018 года (две тысячи восемнадцатого года).

/подпись: Др. Феликс Иселин, Нотариус/

Печать: Феликс Иселин, государственный нотариус в г.Базель

ЛегПрот 2018/702

АПОСТИЛЬ (Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Швейцарская конфедерация, Кантон города Базель


Настоящий официальный документ:

2. Подписан: Доктором Феликсом Иселином
3. Выступающей в качестве: Государственного нотариуса
4. Скреплено печатью: Феликса Иселина

УДОСТОВЕРЕНО:

5. Место удостоверения: Базель
6. Дата удостоверения: 18.12.2018
7. Наименование удостоверяющего органа: Государственная канцелярия кантона города Базель
8. Регистрационный номер: №.: 143800 Сбор 20. 00 Швейцарских франков
9. Печать: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ. КАНТОН ГОРОДА БАЗЕЛЬ
10. Подпись: /Подпись/ Джессика Лак

Перевод с немецкого и английского языков на русский язык выполнен переводчиком
Фоминой Ксенией Евгеньевной. Знание вышеуказанных языков подтверждаю.

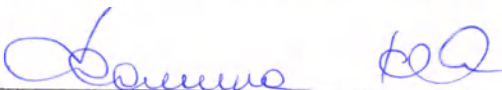

Российская Федерация

Город Москва.

Пятнадцатого января две тысячи девятнадцатого года.

Я, Алехин Евгений Владимирович, нотариус города Москвы,
свидетельствую подлинность подписи переводчика
Фоминой Ксении Евгеньевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 57/171-н/77-2019-1-156

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 рублей 00 копеек.

Уплачено за оказание услуг правового
и технического характера: 200 рублей 00 копеек.

Е.В. Алехин

Прощнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 127 листах



Е.В. Алехин

