

3773

RuñA

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



APPROVED BY

Technical Director &
Management Representative

Carlos Janer

27/01/ 2020

**Аппарат радиочастотный гипертермический
в вариантах исполнения:**

**Аппарат радиочастотный гипертермический
ELITE NS**

**Аппарат радиочастотный гипертермический
RGN**

Руководство по эксплуатации

Версия 1.0 от 01.01.2020

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª.
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.

Содержание

05	ВВЕДЕНИЕ
05	— Аппарат радиочастотный гипертермический в вариантах исполнения
06	— Контактная информация
06	— Назначение
07	— Принцип действия
07	— Резистивный режим (RES)
07	— Емкостный режим (CAP)
08	— Непрерывная модуляция
09	ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
11	ПОКАЗАНИЯ
11	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
11	ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
12	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
12	— Внешний вид изделия
26	— Конструкция изделия
31	— Назначение элементов изделия
32	— Элементы управления изделием
33	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
33	— Первичная установка аппарата
34	— Включение
34	— Выключение
35	НАВИГАЦИЯ ПО ИНТЕРФЕЙСУ
36	— Процедуры, основанные на отсчете времени
37	— Процедуры, основанные на отсчете времени в емкостном режиме (CAP)
38	— Процедуры, основанные на отсчете времени в резистивном режиме (RES)
39	— Процедуры, основанные на количестве переданной энергии
40	— Основанная на количестве переданной энергии процедура в емкостном режиме (CAP)
41	— Основанная на количестве переданной энергии процедура в резистивном режиме (RES)
42	— Использование процедур
42	— Сохраненные процедуры
43	— Создание процедур
47	— Управление программами
48	— Изменение папок и программ
48	— Удаление папок и программ
48	— Перемещение программ

Ha causado el asiento nº 97 de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª. DOY FE.

49	Копирование программ
49	Загрузка сохраненных процедур
50	ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ INDIBA
51	МЕНЮ НАСТРОЕК
52	ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА
52	НАГРЕВ ПЛОСКОГО ВОЗВРАТНОГО ЭЛЕКТРОДА
53	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА
54	ИКОНКИ
55	Пульт управления
56	ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ
56	Типы электродов
56	Возвратные электроды
57	— Рукоятка для электродов CAP
57	— Рукоятка для электродов RES
59	Руководство по эксплуатации
61	Размещение активного электрода и возвратного электрода на теле пациента
62	— Руководство по использованию активных электродов
62	— Емкостные электроды (CAP)
63	Резистивные электроды (RES)
65	Руководство по использованию кабельных соединений
66	ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ КРЕМА ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ INDIBA
67	ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
67	Очистка аппарата
67	Очистка и дезинфекция активных электродов, возвратных электродов и рукояток для электродов
67	При проведении гинекологических процедур
68	РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
69	МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
69	Маркировка
79	Упаковка
86	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
86	Классификация изделия
86	— Соответствие стандартам Российской Федерации
87	Транспортирование, хранение, эксплуатация
88	Масса-габаритные характеристики
90	Технические характеристики
94	Утилизация
95	ГАРАНТИИ
96	Серийный номер
97	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
99	Сообщения об ошибках
100	ГЛОССАРИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
	Информация об электромагнитной совместимости
	Приложение 1 Программа мониторинга
	Приложение 2 Протоколы процедур

Введение

АППАРАТ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:

Аппарат радиочастотный гипертермический ELITE NS, в составе:

1. Комплект ELITE NS, в составе:

- Блок основной ELITE NS – 1 шт.;
- Стойка-тележка – 1 шт.;
- Кабель питания экранированный – 1 шт.;
- Кабель соединительный – 1 шт.;
- Ключ – 6 шт.;
- Рукоятка изогнутая для электрода RES (при необходимости) – 1 шт.;
- Рукоятка изогнутая для электрода CAP (при необходимости) – 1 шт.;
- Рукоятка прямая для электрода CAP (при необходимости) – 1 шт.;
- Пульт управления – 1 шт.;
- Электрод возвратный цилиндрический (при необходимости) – 1 шт.;
- Кабель электрода возвратного цилиндрического (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод возвратный плоский (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 35 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 50 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 65 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 90 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 30 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 40 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 55 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 65 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 80 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Пароль доступа к программному обеспечению – 1 шт.

2. Комплект Welcome Pack, в составе:

- Крем электропроводящий Anticellulite Cream – 1 шт.
- Крем электропроводящий Face Cream – 1 шт.
- Крем электропроводящий Care Cream – 2 шт.
- Насадка массажная – 2 шт.
- USB-накопитель – 1 шт.
- Сумка для электродов – 1 шт.;

3. Комплект PACK GINECO-AESTHETICS, в составе:

- Электрод RES продольный (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP продольный (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 35 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 30 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 40 мм (при необходимости) – 1 шт.;

Аппарат радиочастотный гипертермический RGN, в составе:

1. Комплект RGN, в составе:

- Блок основной RGN – 1 шт.;
- Кабель питания экранированный – 1 шт.;
- Рукоятка изогнутая для электрода RES (при необходимости) – 1 шт.;
- Рукоятка изогнутая для электрода CAP (при необходимости) – 1 шт.;
- Пульт управления – 1 шт.;
- Электрод возвратный плоский (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 35 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод RES диаметром 50 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 30 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 40 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Электрод CAP диаметром 55 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.;
- Пароль доступа к программному обеспечению – 1 шт.

2. Комплект Welcome Pack, в составе:

- Крем электропроводящий Anticellulite Cream – 1 шт.
- Крем электропроводящий Face Cream – 1 шт.
- Крем электропроводящий Care Cream – 2 шт.
- Насадка массажная – 2 шт.
- USB-накопитель – 1 шт.

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª

DOY FE

asda

- Сумка для электродов – 1 шт.;
 - 3. Комплект PACK GINECO-AESTHETICS, в составе:
 - Электрод RES продольный (при необходимости) – 1 шт.;
 - Электрод CAP продольный (при необходимости) – 1 шт.;
 - Электрод RES диаметром 35 мм (при необходимости) – 1 шт.;
 - Электрод CAP диаметром 30 мм (при необходимости) – 1 шт.;
 - Электрод CAP диаметром 40 мм (при необходимости) – 1 шт.;
- Далее по тексту аппарат радиочастотный гипертермический ELITE NS может для краткости называться ELITE NS, а аппарат радиочастотный гипертермический RGN – RGN.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель: Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания
 Адрес производителя: C/Moianès, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Spain
 Телефон: +34 93 265 55 22/+34 93 721 69 20;
 Факс: +34 93 576 30 40/+34 93 721 47 74
 Место производства: Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания
 C/Moianès, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Spain
 Информация об уполномоченном представителе производителя на территории Российской Федерации:
 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)
 Телефон: +7 (499) 281-67-68
 Электронная почта: info@beawire.com
 Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для нагрева подкожных тканей за счет радиочастотной электромагнитной энергии, чтобы уменьшить проявления целлюлита, дряблость кожи, сократить морщины, также его применяют в послеоперационных мероприятиях по восстановлению тканей. Изделие также может быть использовано для снятия болей, мышечных спазмов, в том числе лечения хронических тазовых болей. Изделие состоит из монополярных аппликаторов, присоединяемых к генератору энергии. Изделие не предназначено для лечения злокачественных опухолей.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014):	26.60.13.130
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н:	2а
Классификация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н:	237180

Вид контакта с организмом: Аппарат радиочастотный гипертермический - кратковременный контакт (менее 24 часов) с неповрежденной кожей; Электрод RES продольный, Электрод CAP продольный - кратковременный контакт с неповрежденными слизистыми оболочками.

Способ применения: в соответствии с руководством по эксплуатации.

Условия применения: лечебно-профилактические учреждения, применяется квалифицированными и специально обученными специалистами для взрослых пациентов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В линейке аппаратов производства Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания (в дальнейшем именуемая INDIBA, Indiba) используется технология, разработанная компанией INDIBA для неинвазивной стимуляции механизмов заживления и восстановления. В технологии применяется циркуляция тока определенной частоты (~ 448 кГц), также известного как радиочастотный ток.

Аппарат представляет собой генератор тока с двумя рабочими режимами: емкостным (CAP) и резистивным (RES).

Ток подается на ткани с использованием активных электродов (все электроды, кроме возвратных) и возвратного электрода. Чтобы понять принцип работы, необходимо представить, что генерируемый в изделии ток поступает на активный электрод, протекает по тканям человека, достигает обратного электрода, а затем возвращается в аппарат, замыкая при этом цепь.

Площадь поверхности активного электрода меньше, чем у возвратного, поэтому ток воздействует только на определенную площадь поверхности тела. Это означает, что плотность тока в ткани под активным электродом больше, чем плотность в ткани, находящейся в контакте с возвратным электродом.

В описанных ниже режимах работы (резистивный и емкостной) на обоих электродах (активном и возвратном) всегда должны использоваться электропроводящие крема производства INDIBA для обеспечения необходимого электрического контакта между электродами и тканью.

РЕЗИСТИВНЫЙ РЕЖИМ (RES)

В резистивном режиме используется активный электрод из нержавеющей стали. Этот электрод является хорошим электрическим проводником и воздействует непосредственно на область обрабатываемой ткани (на кожу обязательно наносится электропроводящий крем).

Плотность тока в ткани пропорционально меняется при протекании от активного электрода к возвратному электроду и достигает максимального значения вблизи активного электрода. В результате воздействия тока повышается внутренняя температура ткани. Своего максимального значения температура достигает вблизи активного электрода, постепенно снижаясь по мере отдаления от него.

ЕМКОСТНЫЙ РЕЖИМ (CAP)

В емкостном режиме используется металлический активный электрод, покрытый изоляционным материалом, который воздействует непосредственно на область обрабатываемой ткани (на кожу обязательно наносится электропроводящий крем).

Электрод имеет металлический вал «А» и металлический диск «В», покрытый изоляционным материалом «С». Выходящий из аппарата ток проходит через электрод от вала «А» к диску «В» и затем передается в ткань человека через материал «С».

Как и в резистивном режиме, ток проходит от электрода через ткань к возвратному электроду («D»). При этом ток повышает температуру ткани, через которую он проходит. Увеличение температуры и глубина воздействия зависят от напряжения, подаваемого аппаратом (в зависимости от уровня мощности, выбранного пользователем), размера электрода, характеристик области обрабатываемой ткани и длительности процедуры.

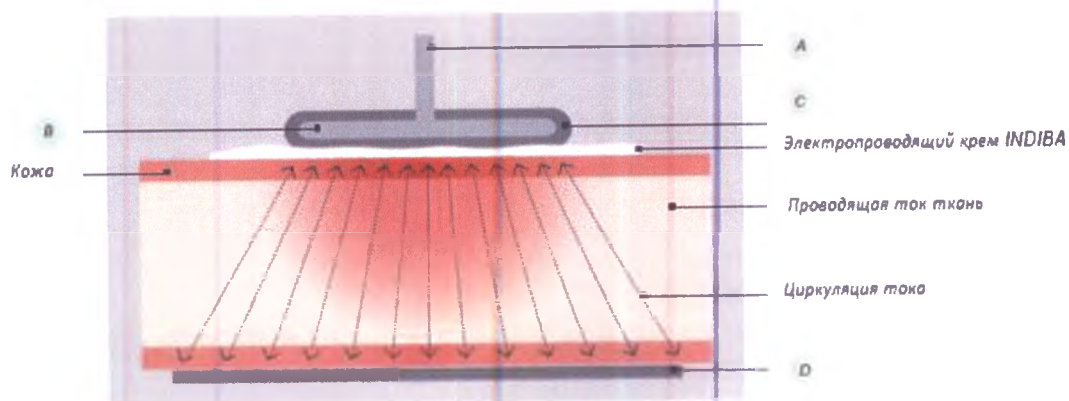


Рис. 1 Принцип действия изделия

В емкостном режиме благодаря изолирующему покрытию тепло также генерируется в нижней части электрода, что делает его предпочтительным режимом для обработки подкожных областей.

Для того чтобы ток мог проходить через изоляционное покрытие, аппарат должен генерировать высокое выходное напряжение.

Несмотря на то, что оба метода повышают внутреннюю температуру ткани, в резистивном режиме достигаются более высокие температуры и глубины обработки.

НЕПРЕРЫВНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Технология частотной модуляции впервые была использована в хирургических электроскальпелях – она позволила обеспечить контроль тканевой коагуляции и локальных кровотечений.

Модуляция — это дополнительный функциональный режим работы аппарата, который позволяет изменять амплитуду частоты, имеющую предварительно заданные характеристики. В этом режиме аппарат автоматически ограничивает значение выходной мощности.

Модуляция повышает скорость и эффективность обработки тканей, позволяя снизить требуемую мощность и улучшая субъективное восприятие пациента во время лечения.

Этот режим можно включать/отключать в зависимости от показаний к лечению, происхождением и давностью проблемы, местоположением пораженной области, ее степени и серьезности, схемой лечения и, в конечном счете, в соответствии с терапевтическими задачами.

Основные предупреждения

(ВАЖНО): Внимательно изучите руководство по эксплуатации перед использованием аппарата.

Несоблюдение инструкций, описанных в руководстве по эксплуатации, может представлять риск для пациентов.

Аппарат должен применяться профессиональными пользователями, которые прошли курс обучения, проводимый компанией INDIBA.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Во избежание поражения электрическим током аппарат следует подключать только к заземленной электрической цепи.
- Убедитесь, что при подключении аппарата были соблюдены требуемые характеристики напряжения. Диапазон допустимых напряжений питания указан на маркировке на задней панели аппарата.
- Для пульта управления используйте только те батарейки, характеристики которых соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими правилами.
- Оставьте промежуток не менее 10 см между задней частью аппарата и стеной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха через вентилятор. Убедитесь, что задняя часть аппарата не заблокирована – следите за тем, что полотенца или одежда не закрывали вентиляционные отверстия.
- Используйте только электропроводящие крема производства компании INDIBA. Использование других электропроводящих кремов может привести к ухудшению результатов и аннулированию гарантии на аппарат. Неодобренные электропроводящие крема могут привести к ожогам и снижению срока службы электродов.
- Используйте только кабели, поставляемые производителем. Использование других кабелей (например, более длинных кабелей) может изменить выходные значения аппарата или его устойчивость к другим видам излучения.
- Аппарат должен подключаться к источнику электропитания с соответствующим напряжением. Диапазон допустимых напряжений питания указан на маркировке на задней панели аппарата.
- Во избежание поражения электрическим током этот аппарат следует подключать только к заземленному источнику питания.
- Никогда не изменяйте конструкцию аппарата.
- Не открывайте и не разбирайте аппарат. В случае неисправности: этот аппарат не содержит частей, которые могут обслуживаться пользователем. Ремонт аппарата должен выполняться только квалифицированными специалистами, сертифицированными компанией INDIBA.
- В случае неисправности или утечки жидкости из жидкокристаллического дисплея аппарата избегайте контакта с жидкостью.
- Не используйте изделие вблизи аппаратов для коротковолновой терапии, так как их излучение может повлиять на изделие.
- Данный аппарат не предназначен для использования в легковоспламеняющихся средах.
- Данный аппарат не должен использоваться на пациентах одновременно с любым другим изделием.
- Не используйте аппарат на пациентах с электронными имплантатами (например, кардиостимулятором) без медицинского осмотра.
- На подлежащей лечению области тела пациента не должно быть колец, сережек, пирсинга и других металлических предметов. Избегайте контакта с проводящими частями, которые могут создавать нежелательные пути для радиочастотного тока. При использовании аппарата оператор должен снять кольца со всех пальцев.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª.
DOY FE

- Оператор не должен прикасаться к электродам руками. Всегда держите электрод за рукоятку для электродов.

- Если аппарат работает, нажмите кнопку паузы перед вставкой, снятием или заменой электрода.

Никогда не используйте емкостные электроды с признаками износа, такими как небольшие отверстия, трещины или сколы покрытия.

- Никогда не используйте аппарат, если возвратный электрод не был должным образом закреплен. Несоблюдение этого требования может привести к ожогам тела пациента.

Не используйте электроды, если на кабелях рукоятки для электродов имеются признаки повреждения или износа.

- Немедленно прекратите процедуру, если пациент чувствует, что электроды слишком горячие.

- Перед началом процедуры очистите обрабатываемую область.

- Удалите с кожи любые продукты или вещества, которые могут повлиять на процедуру.

- Не прилагайте чрезмерного усилия на валы электродов при их использовании; неправильное обращение может привести к их смещению или образованию трещин на поверхности электрода.

- Электроды CAP имеют покрытие из полиамидного пластика. Не подвергайте их воздействию температур выше 90 °C.

- Избегайте ударов электродов, не царапайте их острыми или заостренными предметами. Если покрытие изношено или откалывается от металлической части, не используйте электрод CAP - замените его.

- У гипотоников, проходящих лечение шейного отдела позвоночника или любой другой части позвоночника или суставов конечностей, может наблюдаться снижение артериального давления. В этом случае лечение должно быть остановлено до тех пор, пока уровень артериального давления не вернется в норму.

- Перед выполнением процедур по уходу за лицом в резистивном режиме следует снять вставную челюсть.

Непосредственное воздействие на яички должно выполняться только при субтермальной температуре.

- Пациенты, принимающие пероральные антикоагулянты, должны проконсультироваться с врачом перед началом лечения с помощью данного аппарата.

Аппарат предназначен только для лечения взрослых пациентов.

У пожилых пациентов чаще наблюдаются повреждения кожи, поэтому лечение следует проводить с особой осторожностью, чтобы избежать травм или ожогов кожи.

- Аппарат следует применять с осторожностью на пациентах с известными аллергическими реакциями на никель и хром. Прекратите лечение, если в областях, находящихся в контакте с возвратным плоским электродом, возвратным цилиндрическим электродом или резистивным электродом, или электропроводящими кремами наблюдается аллергическая реакция.

- Не рекомендуется применение резистивных режимов лечения на областях с внутренней инфекцией или инкапсулированием (абсцессы). Существует риск распространения инфекции. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом перед началом лечения с помощью данного аппарата.

- При проведении гинекологических процедур специалисту рекомендуется использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

Показания

Подтяжка кожи:

- Уменьшение морщин.
- Укрепление шеи и декольте.
- Уменьшение двойного подбородка.

Уменьшение целлюлита

- Гиноидная липодистрофия

Ремоделирование фигуры

- Неинвазивная коррекция фигуры
- Удаление или уменьшение избытка кожи и жира
- Контуринг тела

До и после операции

- Предоперационное лечение
- Заживление тканей
- Заживление ран
- Избавление от шрамов
- Лечение ожогов

Вагинальное омоложение и связанные с этим клинические проблемы

- Исправление вульвовагинальной слабости
- Лечение стрессового недержания мочи
- Генитоуринарный синдром в менопаузе
- Сексуальная дисфункция.

Изделие также может быть использовано для снятия болей, мышечных спазмов, в том числе лечения хронических тазовых болей.

Любое лечение, будь то монотерапия или сочетание различных видов лечения, должно проводиться только по предписанию врача.

Противопоказания

- Наличие кардиостимуляторов или других электронных имплантатов.
- Беременность.
- Повреждения кожи (открытые раны или недавние ожоги).
- Тромбофлебит.
- Отсутствие чувствительности (врожденная нечувствительность к боли, повреждение нервов, паралич или фармакологическое лечение, снижающие чувствительность к боли или жаре)
- Изделие не предназначено для лечения злокачественных опухолей.

Побочные эффекты

После процедуры пациенты обычно ощущают тепло в обработанной области, что может вызвать некоторый дискомфорт. В редких случаях применение электропроводящих кремов может вызвать незначительное раздражение кожи.

Описание изделия

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



Рис. 2 Общий вид изделия в варианте исполнения Аппарат радиочастотный гипертермический ELITE NS (блок основной размещен на стойке-тележке, ящики выдвинуты, подключены рукоятки изогнутые для электродов RES и CAP и возвратный плоский электрод)

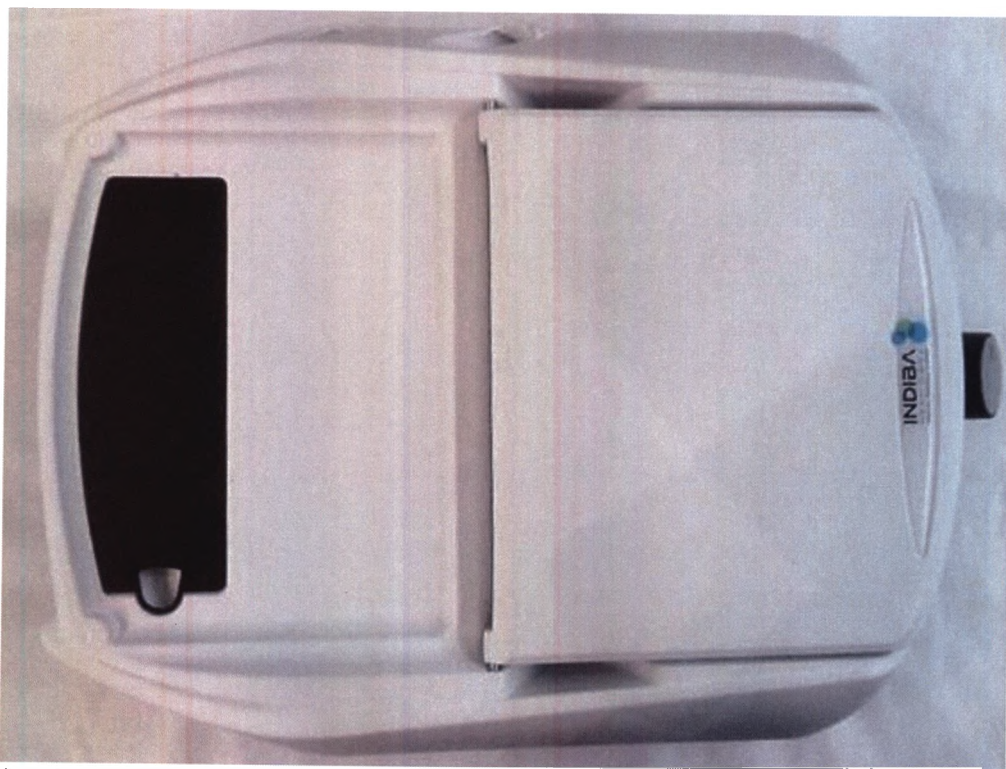


Рис. 3 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид сверху с закрытой крышкой)

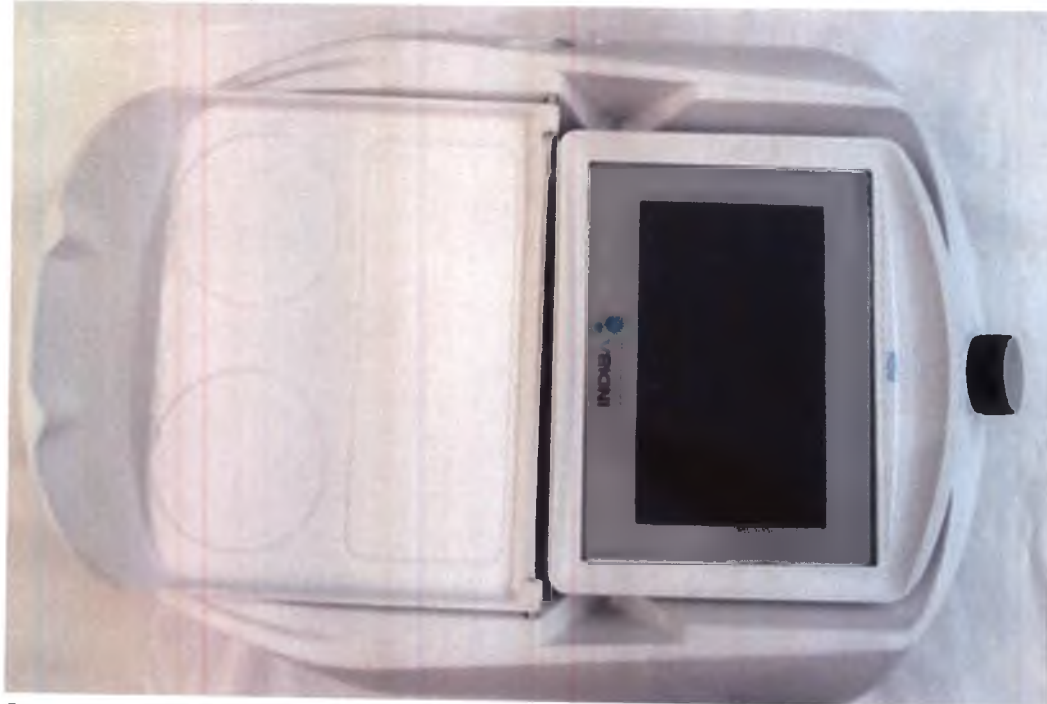


Рис. 4 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид сверху с открытой крышкой)

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.

acm

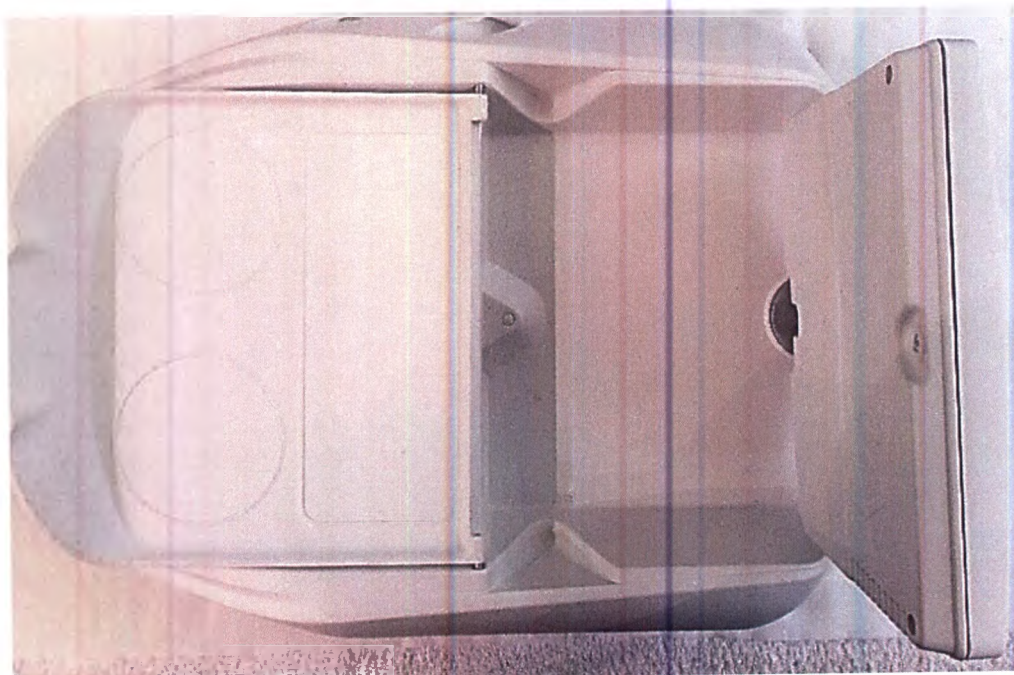


Рис. 5 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид сверху с открытой крышкой и поднятом мониторе)

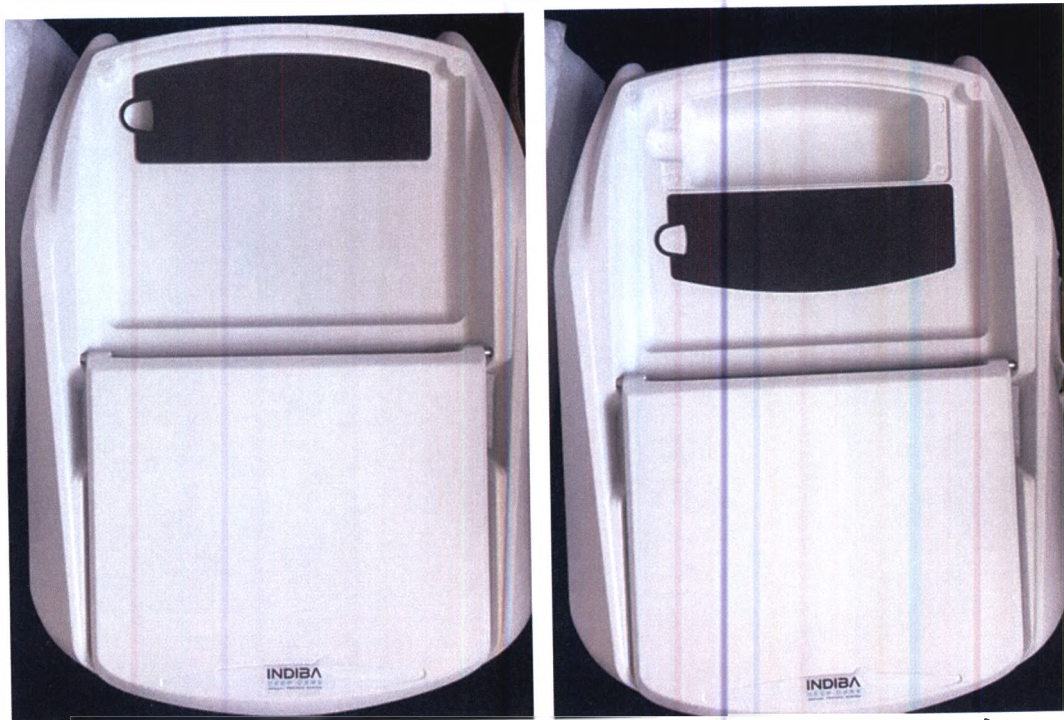


Рис. 6 Внешний вид изделия с закрытым (слева) и открытым (справа) отсеком для пульта управления. Крышка отсека для пульта управления крепится на корпусе с помощью встроенных магнитов.

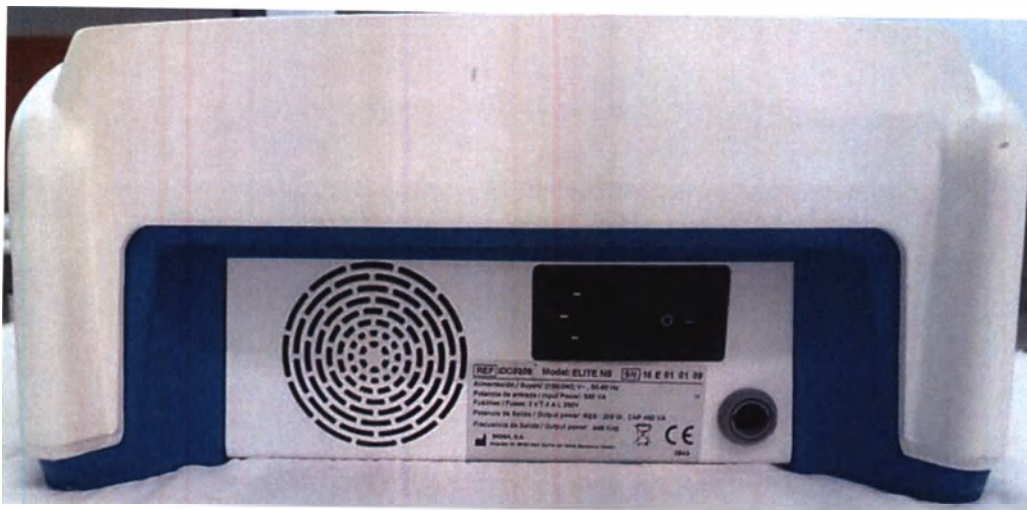


Рис. 7 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид сзади, маркировка представлена для варианта исполнения ELITE NS)

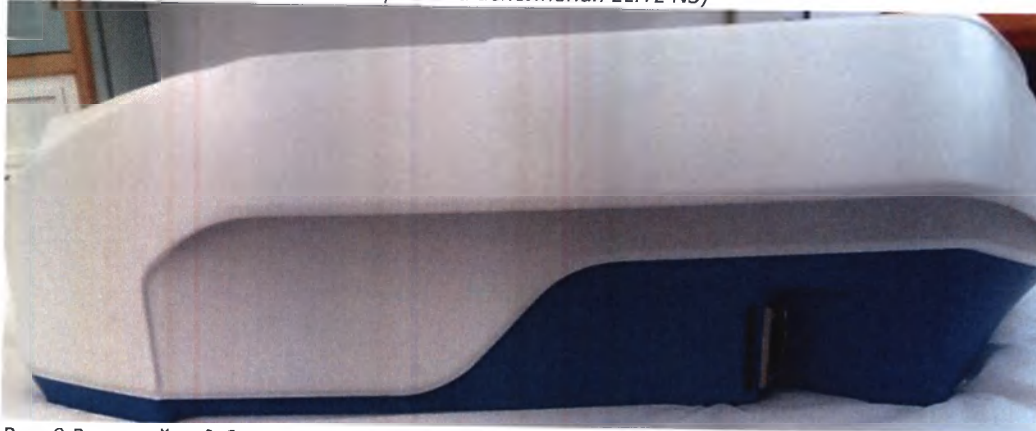


Рис. 8 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид сбоку)



Рис. 9 Разъем для подключения возвратного плоского и цилиндрического электродов. Для того чтобы извлечь разъем для подключения к аппарату от самого аппарата, необходимо нажать на верхнюю кнопку «PUSH»

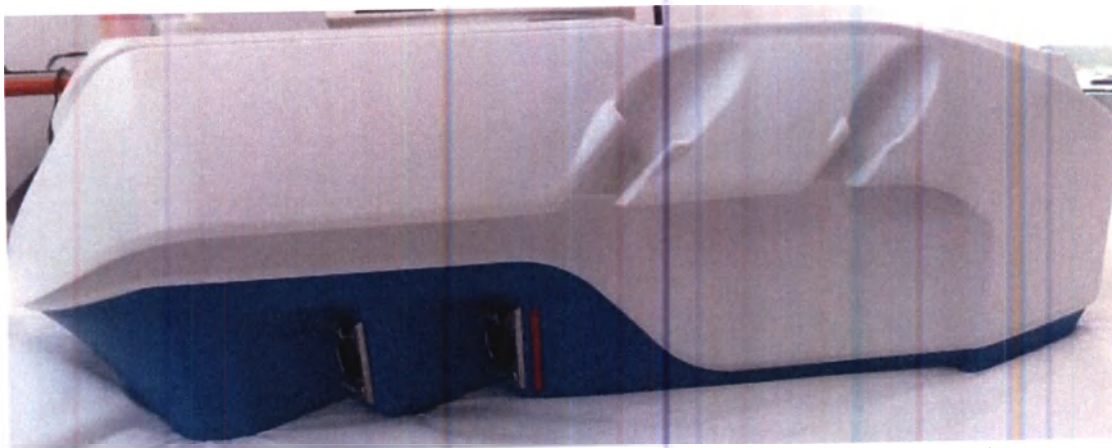


Рис. 10 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид сбоку)



Рис. 11 Разъем для подключения рукояток для электродов. Рядом с каждым разъемом находится определенный цвет: «синий» - данный разъем предназначен для рукоятки изогнутой для электрода RES (на рукоятке есть ободок синего цвета в качестве подсказки оператору), «красный» - данный разъем предназначен для рукоятки изогнутой и прямой для электрода CAP (на рукоятке есть ободок красного цвета в качестве подсказки оператору). Для того чтобы извлечь разъем для подключения к аппарату от самого аппарата, необходимо нажать на верхнюю кнопку «PUSH».



Рис. 12 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид спереди)

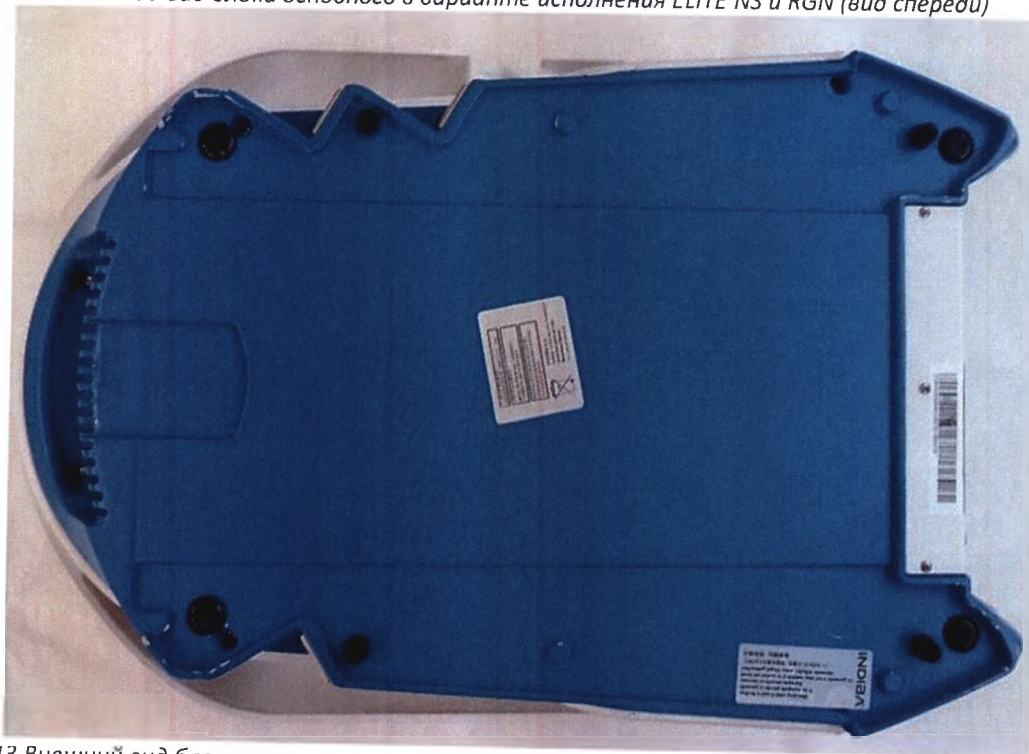


Рис. 13 Внешний вид блока основного в варианте исполнения ELITE NS и RGN (вид снизу)

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2010
Sección 2ª
. DOY FE
[Signature]



Рис. 14 Пульт управления

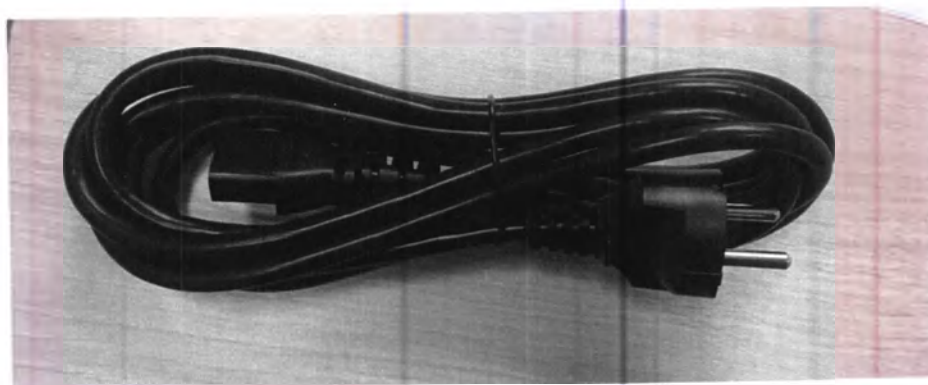


Рис. 15 Кабель питания экранированный



Рис. 16 Сумка для электродов



Рис. 17 Открытая сумка для электродов. Сумка для электродов открывается и закрывается с помощью вшитой молнии. В сумку вставлен вспененный полиэтилен для размещения электродов (в центре каждого черного круга из пены имеется специальное отверстие для вала электрода).



Рис. 18 Кабель соединительный

asdr

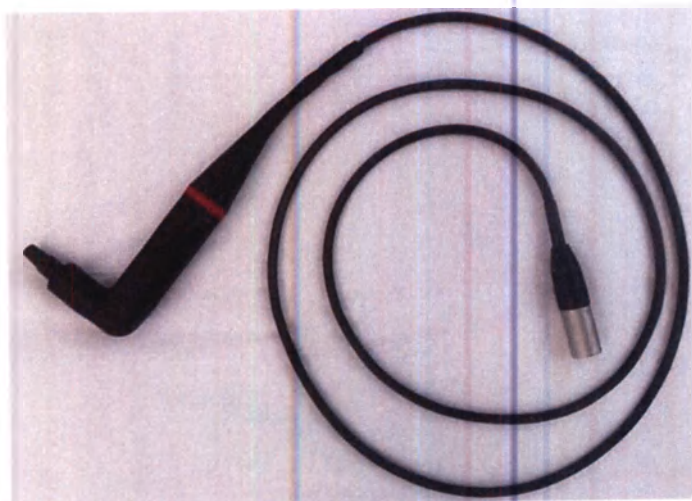


Рис. 19 Рукоятка изогнутая для электрода САР

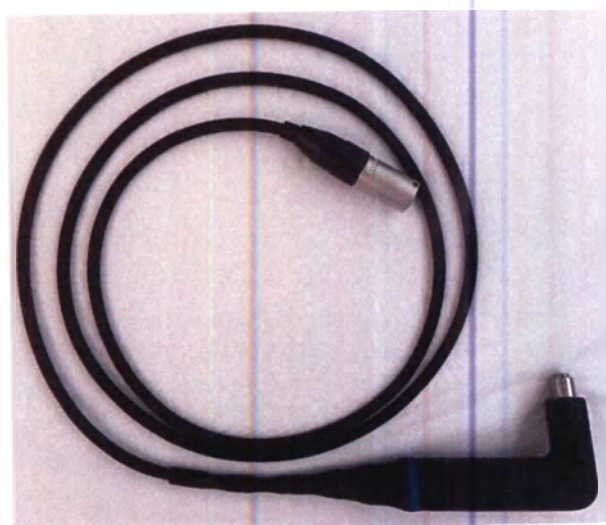


Рис. 20 Рукоятка изогнутая для электрода RES



Рис. 21 Рукоятка прямая для электрода САР



Рис. 22 Электрод возвратный плоский

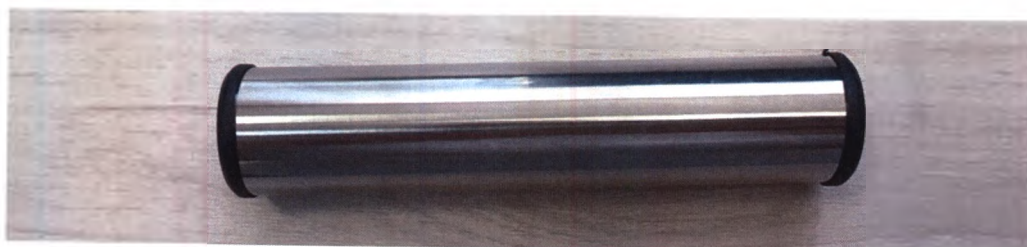


Рис. 23 Электрод возвратный цилиндрический



Рис. 24 Кабель электрода возвратного цилиндрического

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

21

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,

2020

DOY FE

[Handwritten signature]

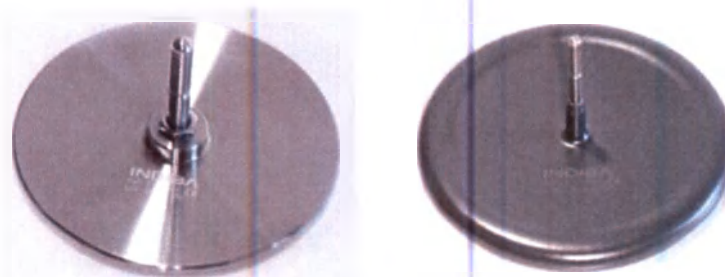


Рис. 25 Электрод RES (слева) и CAP (справа) (также могут называться резистивный и емкостной электроды соответственно)



Рис. 26 Крем электропроводящий Care Cream (слева), Anticellulite Cream (в центре), Face Cream (справа) (в полиэтиленовой защитной упаковке)



Рис. 27 USB-накопитель



Рис. 28 Насадка массажная



Рис. 29 Стойка-тележка (вид спереди) со вставленными ключами.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

23

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.

Handwritten signature



Рис. 30 Стойка-тележка (вид сбоку с подсоединенным кабелем соединительным)

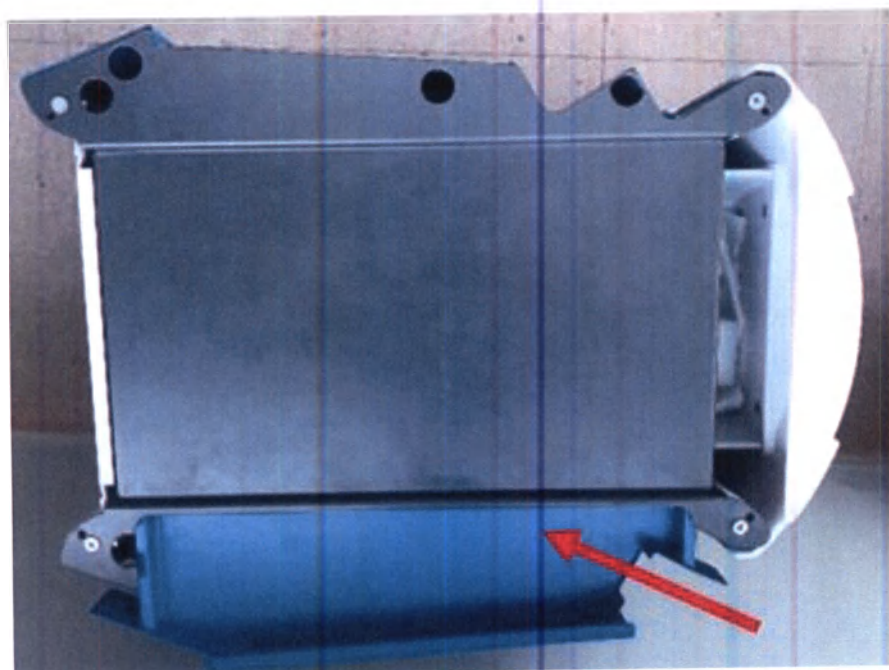


Рис. 31 Стойка-тележка (вид сверху). Стрелкой обозначен выдвигаемый отсек для размещения возвратного плоского электрода



Рис. 32 Переключение напряжения на задней стороне стойки-тележки и разъем для соединения блока основного со стойкой-тележкой

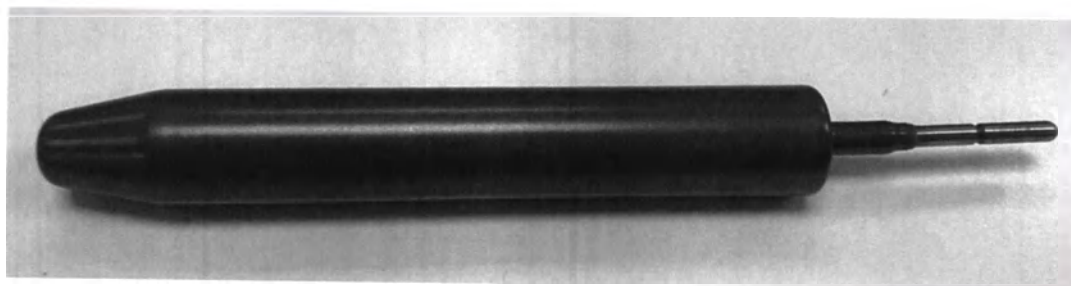


Рис. 33 Электрод CAP продольный




Рис. 34 Электрод RES продольный

Handwritten signature

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


Вид спереди

- 1 Сенсорный экран (дисплей)
- 2 Разъем рукоятки для электродов RES
- 3 Разъем рукоятки для электродов CAP
- 4 Разъем возвратного электрода
- 5 Ручка настройки мощности и запуска/остановки процедуры (также называемая энкодер)

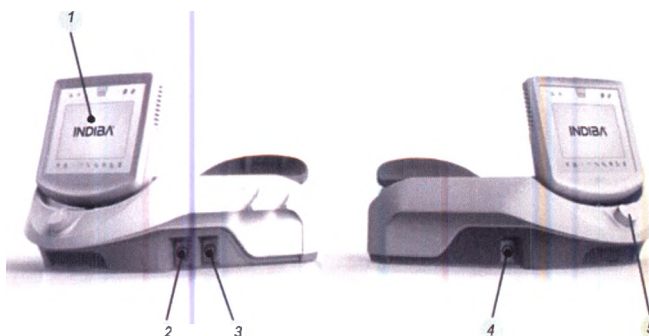

Вид сзади

6. Выключатель питания
7. Отсек предохранителей
- 8 Разъем кабеля питания экранированного
- 9 Вентилятор
- 10 Маркировка
- 11 Гнездо для подсоединения кабеля соединительного стойки-тележки

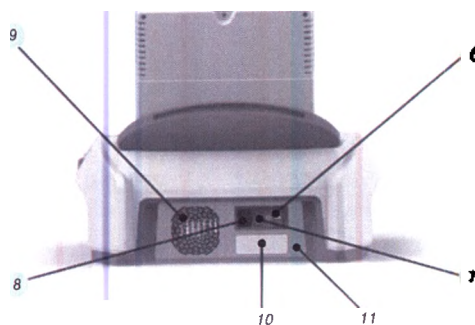


Пульт управления*

- 12 Кнопка уменьшения мощности
13. Кнопка увеличения мощности
14. Кнопка запуска/остановки процедуры

Звездочкой обозначен индикатор состояния: включен – аппарат обнаружил контакт с пациентом (идет процедура), мигает – аппарат ждет контакта с пациентом, выключен – кнопка начала процедуры не была нажата.

*Поставляется совместно с батареей для пульта управления.

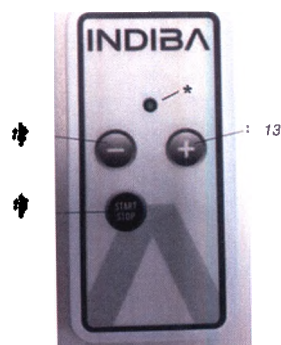

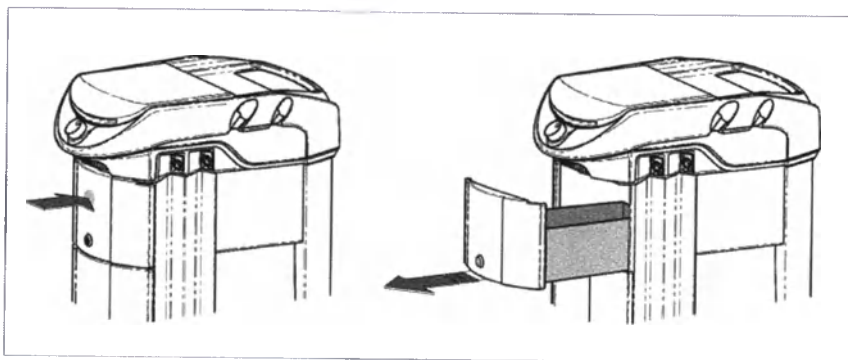


Рис. 35 Открытие ящиков стойки-тележки

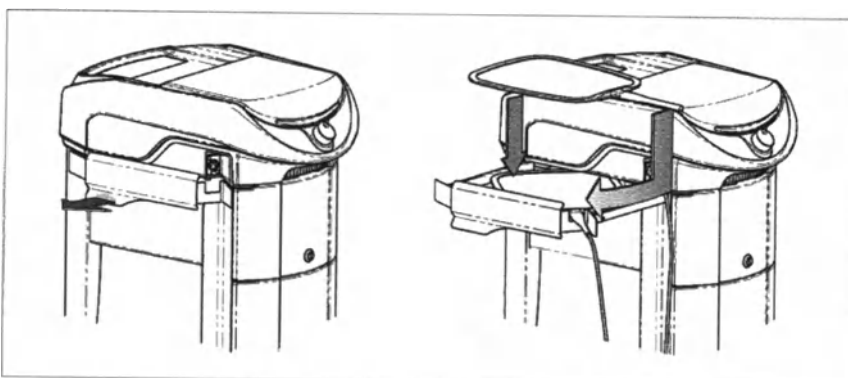


Рис. 36 Открытие ящика для электрода возвратного плоского



Рис. 37 Блокировочный механизм колесиков. Необходимо нажать ногой на элементы, выделенные стрелками, для блокировки движения стойки-тележки

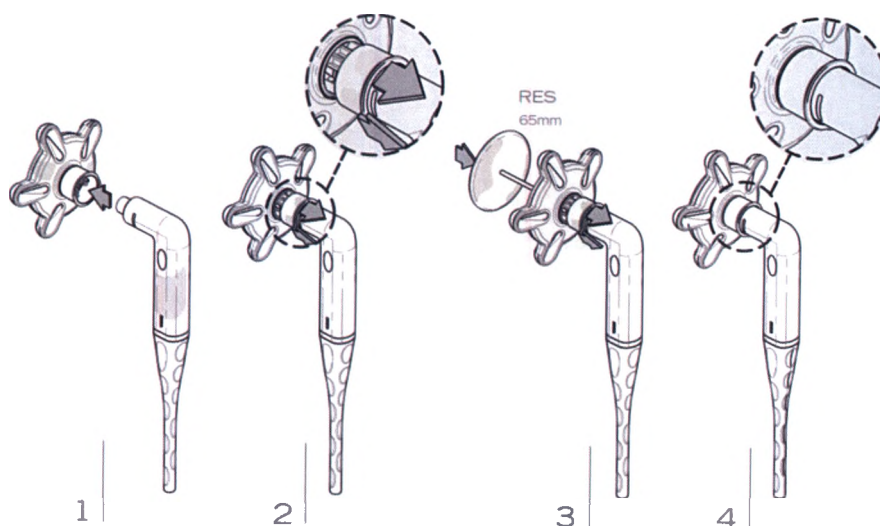


Рис. 38 Инструкция по установке насадки массажной. Массажная насадка может использоваться только совместно с электродом RES диаметром 65 мм

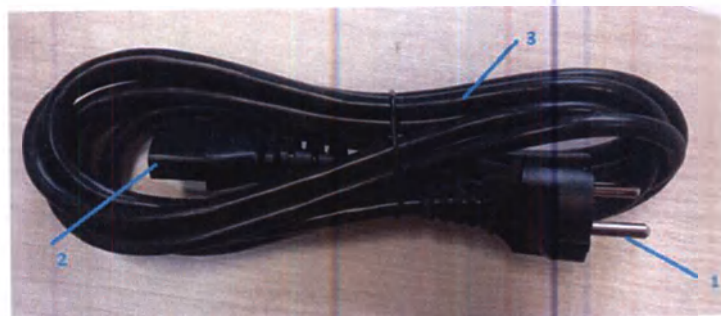


Рис. 39 Конструкция кабеля питания экранированного

- 1 – Вилка сетевая для подключения к сети питания
- 2 – Разъем для подключения к аппарату
- 3 – Провод кабеля питания экранированного

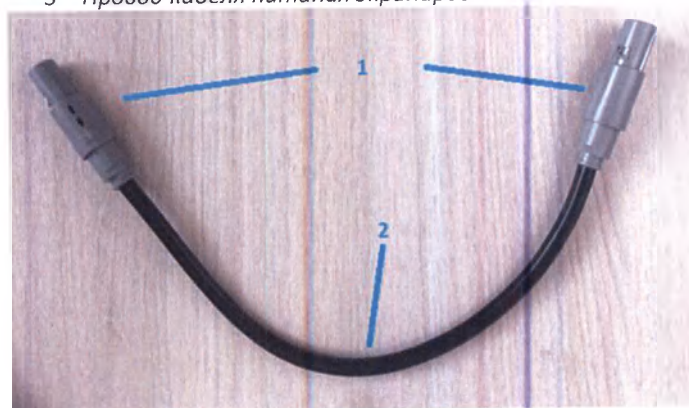


Рис. 40 Конструкция кабеля соединительного

- 1- Разъемы для подключения к стойке-тележке и блоку основному (имеют одинаковый интерфейс)
- 2 – Провод кабеля соединительного

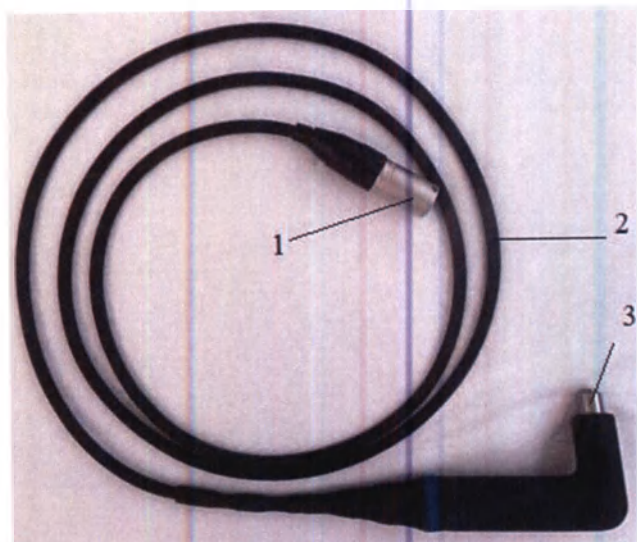


Рис. 41 Конструкция рукоятки изогнутой для электрода RES (другие рукоятки имеют схожую конструкцию)

- 1 - Разъем для подключения к аппарату
- 2 - Провод рукоятки изогнутой для электрода RES
- 3 - Разъем для подключения электрода RES

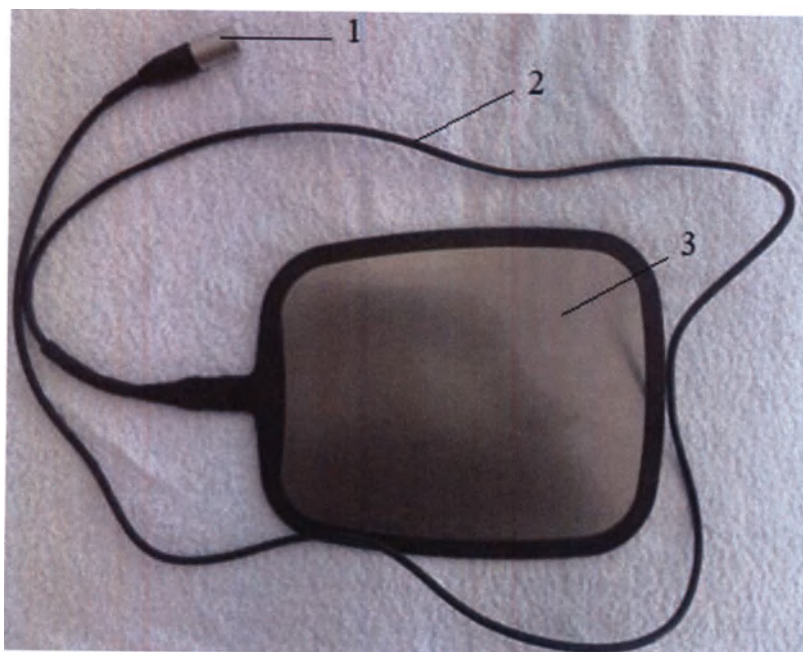


Рис. 42 Конструкция возвратного плоского электрода

- 1 - Разъем для подключения к аппарату
- 2 - Провод возвратного плоского электрода
- 3 - Возвратный плоский электрод



Рис. 43 Конструкция кабеля электрода возвратного цилиндрического

- 1 - Разъем для подключения к электродному возвратному цилиндрическому
- 2 - Разъем для подключения к аппарату
- 3 - Провод кабеля электрода возвратного цилиндрического

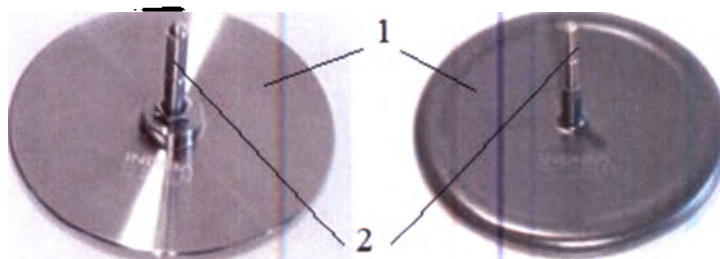



Рис. 44 Конструкция электродов RES (слева) и CAP (справа)
 1. Электрод
 2. Вал электрода

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Блок основной ELITE NS, Блок основной RGN	Генерирует высокочастотный электрический ток, управляет работой аппарата.
Стойка-тележка	Служит в качестве подставки для блока основного и способа его перемещения с помощью колесиков стойки-тележки. Ее выдвижные ящики могут являться местом хранения элементов изделия.
Кабель питания экранированный	Служит для подключения аппарата к сети питания.
Кабель соединительный	Служит для передачи энергии от блока основного к стойке-тележке. Поскольку возвратный плоский электрод находится в непосредственном контакте с пациентом, то важно, чтобы пациенту было комфортно к нему прикасаться. Внутри стойки-тележки есть нагреватель, и помещенный в специальный отсек возвратный плоский электрод нагревается до комфортной температуры.
Кабель электрода возвратного цилиндрического	С помощью данного кабеля возвратный цилиндрический электрод может быть подключен к аппарату.
Сумка для электродов	В ней можно хранить и переносить электроды.
Ключ	Выдвижные ящики стойки-тележки могут быть заперты с помощью ключей.
Рукоятка (всех вариантов исполнения)	Служит для подсоединения электродов
Электрод RES, CAP (всех вариантов исполнения)	Служит для подведения радиочастотного тока к телу пациента.
Электрод возвратный (всех вариантов исполнения)	Служит для замыкания цепи между пациентом и блоком основным.
Пульт управления	Служит для дистанционного управления работой аппарата
Крем электропроводящий (всех вариантов исполнения)	Служит для уменьшения сопротивления контакта электрод-кожа во время проведения процедуры, также минимизирует трение между кожей и электродом.
Насадка массажная	Крепится на электрод для создания дополнительного массажного эффекта во время процедуры.
USB-накопитель	На USB-накопителе находятся фотографии аппарата, фотографии проведения процедур, рекламные фотографии и видео, а также руководство по эксплуатации.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ

- 15 Кнопка возврата на главный экран
- 16 Кнопка возврата на предыдущий экран
- 17 Кнопка доступа в меню настроек
- 18 Кнопка включения/выключения программы мониторинга
- 19 Кнопка включения/выключения нагрева возвратного плоского электрода *
- 20 Кнопка отображения информации об эксплуатации изделия

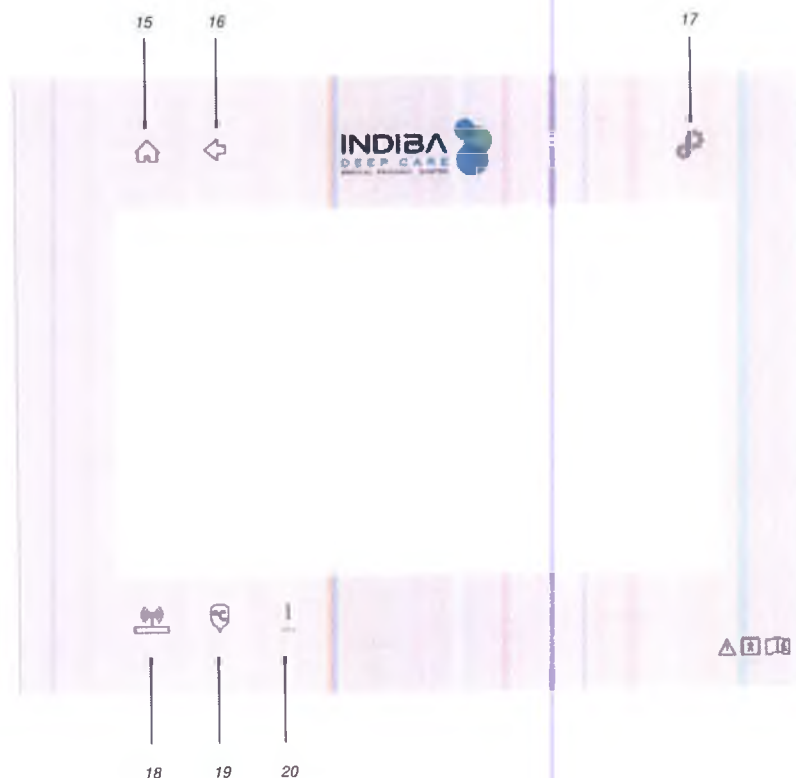

Наличие данных значков зависит от статуса работы дисплея.

(*) Эта функция доступна только в том случае, если изделие установлено на стойку-тележку и соединено с ней с помощью соединительного кабеля.


Эксплуатация изделия

ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА АППАРАТА


Первичная установка изделия может осуществляться конечным пользователем.

Для того, чтобы установить блок основной ELITE NS на стойку тележку необходимо придерживаться схемы установки, показанной ниже. На блоке основном есть специальные выступающие элементы, которые при правильной установке должны полностью совпасть с отверстиями на верхней панели стойки-тележки.


Правильно установленный блок основной не должен шататься на стойке-тележке.

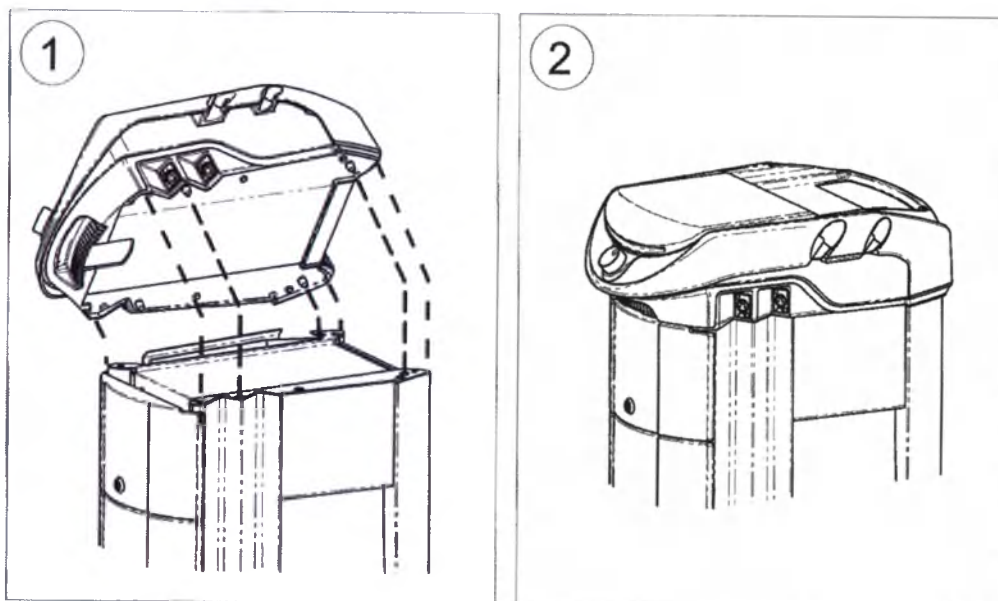

Перед включением аппарата выберите соответствующее напряжение сети питания.

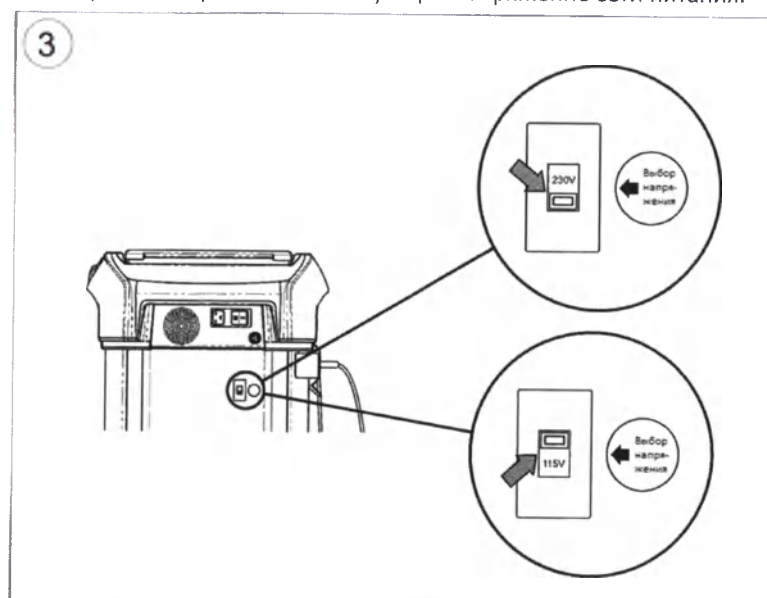

Подключите к разъему блока основного соединительный кабель для возможности включения нагрева поверхности, предназначенной для размещения возвратного плоского электрода.

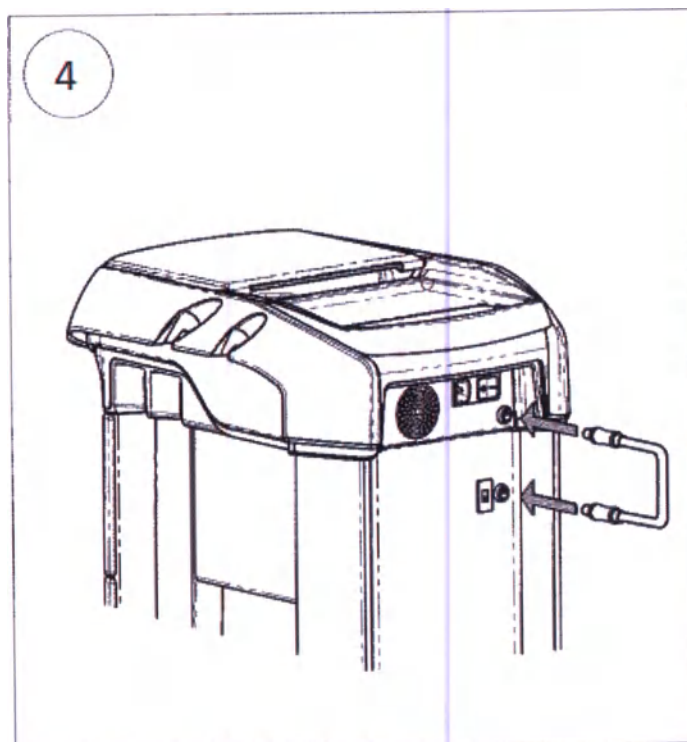

ВКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Подключите кабель питания экранированный к задней части аппарата (8).
- 2 Подключите кабель питания экранированный к сетевой розетке.
- 3 Включите аппарат, нажав на выключатель питания на задней панели (6).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если аппарат не используется, нажмите на выключатель питания на задней панели (6) и переведите его в положение «выключено». Рекомендуется отключать изделие, если не планируется использовать его в течение нескольких часов.

Навигация по интерфейсу

При включении на экране аппарата должен появиться на несколько секунд стартовый экран (аппарат при этом загружается и проверяется).



В конце запуска должен отобразиться главный экран:

- 21. Кнопка запуска процедуры, основанной на отсчете времени
- 22. Кнопка запуска процедуры, основанной на количестве переданной энергии
- 23. Кнопка перехода к сохраненным процедурам




Кнопки 21, 22 и 23 могут быть выбраны с помощью энкодера (5).



ПРОЦЕДУРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОТСЧЕТЕ ВРЕМЕНИ

При нажатии кнопки запуска процедуры, основанной на отсчете времени (21), аппарат выводит следующий экран:

- 24 Кнопка увеличения длительности процедуры
- 25 Кнопка уменьшения длительности процедуры
- 26 Кнопка включения/отключения контроля предельного значения выходной мощности
- 27 Кнопка включения/отключения модуляции выходного сигнала
- 28 Кнопка выбора режима (ЕМКОСТНЫЙ (CAP)/РЕЗИСТИВНЫЙ (RES))
- 29 Кнопка завершения процедуры
- 30 Кнопка «ПАУЗА», которая приостанавливает процедуру
- 31 Кнопка «СТАРТ», которая запускает процедуру

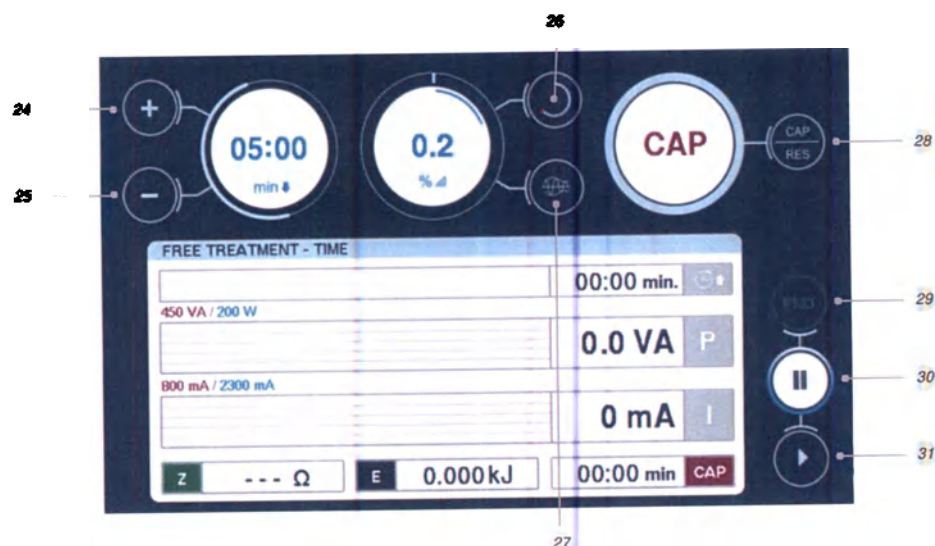

Перед началом процедуры вы можете установить следующие значения:

- Время процедуры: для этого необходимо нажать на кнопку увеличения (24) и уменьшения длительности процедуры (25). Минимальное время составляет 1 минуту, а максимальное - 99 минут. Длительность процедуры можно увеличить или уменьшить с шагом в одну минуту.
- Выходную мощность можно изменить с помощью энкодера (5) или кнопок (12) и (13) на пульте управления. Выходную мощность можно изменить от 0 до 100%, в каждом диапазоне значений свой шаг приращения:
 - Выходная мощность до 5% - шаг 0,2% для модели ELITE NS и 1% для модели RGN.
 - Выходная мощность от 5% до 30%, шаг 1%.
 - Выходная мощность от 30% до 100% - шаг 2%.
- Выбор режима работы с помощью кнопки выбора режима (28).
- Контроль предельного значения выходной мощности (26) можно включить/отключить в меню «Настройки» (17). Эта кнопка (26) используется для включения или отключения этой опции. Вы можете изменить предельное значение выходной мощности, не переходя в меню «Настройки», нажав и удерживая кнопку (26).

- Кнопка (27) позволяет включить/отключить модуляцию выходного сигнала. При модуляции аппарат автоматически ограничивает выходную мощность.

Во время процедуры могут быть установлены следующие значения

- Выходная мощность - используйте энкодер (5) или кнопки (12) и (13) на пульте управления.
- Время процедуры – вы можете увеличить (24) и уменьшить (25) время процедуры.

Основанная на отсчете времени процедура в емкостном режиме (CAP)

На дисплее аппарата отображаются следующие рабочие параметры:

32. Время (в минутах), установленное пользователем. По истечении времени процедуры (заданное время отображает таймер) аппарат выдает звуковой сигнал, который отмечает конец процедуры, и прекращает подачу выходной мощности. На дисплее появляется сообщение о том, что процедура была закончена.
33. Индикатор выходного уровня мощности в %.
34. Индикатор режима работы (CAP).
35. Время (в минутах). Совокупное значение времени от начала процедуры до текущего момента.
36. Передаваемая полная мощность: текущее значение полной мощности, подаваемой в ВА (вольт-амперы). Это значение представляет собой сумму резистивной мощности (активной или истинной) и реактивной мощности (изолирующей). Основной график показывает изменение этого значения за прошедшее время процедуры.
37. Выходной ток (I): текущее значение тока, протекающего через электрод и ткань, измеренное в миллиамперах (mA). В меню «Настройки» (17) вы можете выбрать значение (Ω или mA), изменение которого вы хотите показать на графике.
38. Импеданс (Z), измеренный в Ом (Ω): текущее значение сопротивления ткани тела и электрода. Если появляются три тире («---»), это значение слишком велико и, следовательно, выходит за пределы шкалы, либо выходная мощность слишком низкая, чтобы правильно выполнить это измерение. Изделие может быть настроено таким образом, чтобы второй график показывал изменение этого значения за время процедуры.
39. Энергия (E), измеренная в килоджоулях (кДж): кумулятивная величина мощности, подаваемой в течение данного этапа процедуры.
40. Время (в минутах). Совокупное значение длительности процедуры.



НАВИГАЦИЯ ПО ИНТЕРФЕЙСУ


37

Ha causado el asiento nº 97 de mi Libro Indicador del año 2020, Sección 2ª, DOY FE.

Основанная на отсчете времени процедура в резистивном режиме (RES)

На дисплее изделия отображаются следующие рабочие параметры:

- 32 Время (в минутах), установленное пользователем. По истечении времени процедуры (заданное время отображает таймер) аппарат выдает звуковой сигнал, который отмечает конец процедуры, и прекращает подачу выходной мощности. На дисплее появляется сообщение о том, что процедура была закончена.
- 33 Индикатор выходного уровня мощности в %
- 34 Индикатор режима работы (RES).
- 35 Время (в минутах). Совокупное значение времени от начала процедуры до текущего момента.
- 36 Передаваемая полная мощность: текущее значение полной мощности, подаваемой в ваттах (Вт). Основной график показывает изменение этого значения за прошедшее время процедуры.
- 37 Выходной ток (I): текущее значение тока, протекающего через электрод и ткань, измеренное в миллиамперах (мА). В меню «Настройки» (17) вы можете выбрать значение (Ω или мА), изменение которого вы хотите показать на графике.
- 38 Электрическое сопротивление (R), измеренное в Ом (Ω): текущее значение сопротивления ткани тела. Если появляются три тире («---»), это значение слишком велико и, следовательно, выходит за пределы шкалы, либо выходная мощность слишком низкая, чтобы правильно выполнить это измерение. Изделие может быть настроено таким образом, чтобы второй график показывал изменение этого значения за время процедуры.
- 39 Энергия (E), измеренная в килоджоулях (кДж): кумулятивная величина энергии, подаваемой в течение данного этапа процедуры.
- 40. Время (в минутах). Совокупное значение длительности процедуры.

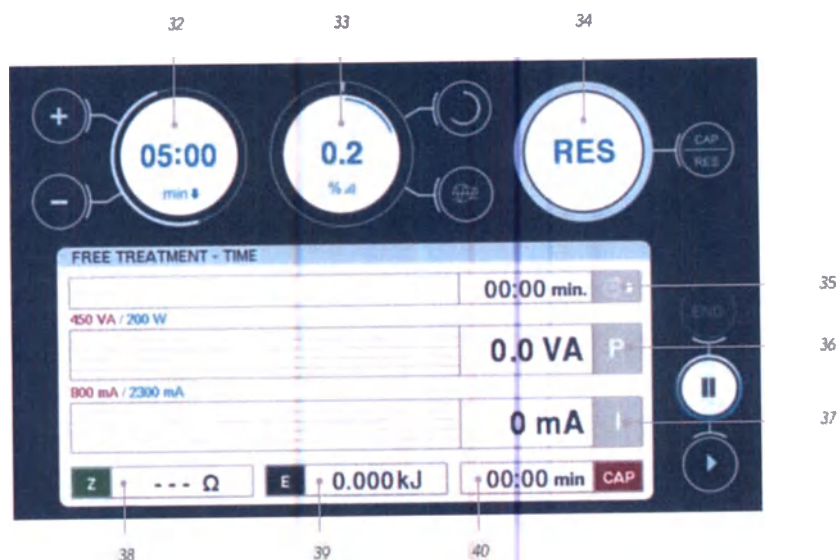

ПРОЦЕДУРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА КОЛИЧЕСТВЕ ПЕРЕДАННОЙ ЭНЕРГИИ

При нажатии кнопки запуска процедуры, основанной на количестве переданной энергии (22), аппарат выводит следующий экран:

24. Кнопка увеличения количества передаваемой энергии.
25. Кнопка уменьшения количества передаваемой энергии.
26. Кнопка включения/отключения контроля предельного значения выходной мощности.
27. Кнопка включения/отключения модуляции выходного сигнала.
28. Кнопка выбора режима (ЕМКОСТНЫЙ (CAP)/РЕЗИСТИВНЫЙ (RES)).
29. Кнопка завершения процедуры.
30. Кнопка «ПАУЗА», которая приостанавливает процедуру.
31. Кнопка «СТАРТ», которая запускает процедуру.



Перед началом процедуры вы можете установить следующие значения:

- * Количество переданной энергии можно увеличить или уменьшить, используя кнопку увеличения (24) и уменьшения (25). Минимальное количество составляет 1 кДж, а максимальное - 999 кДж. Количество передаваемой энергии может быть увеличено или уменьшено с шагом в 1 кДж. Также можно увеличить или уменьшить значение на 10 кДж, нажав и удерживая кнопку количества переданной энергии.
- * Выходную мощность можно изменить с помощью энкодера (5) или кнопок (12) и (13) на пульте управления. Выходную мощность можно изменить от 0 до 100%, в каждом диапазоне значений свой шаг приращения:
 - Выходная мощность до 5% - шаг 0,2% для модели ELITE NS и 1% для модели RGN.
 - Выходная мощность от 5% до 30%, шаг 1%.
 - Выходная мощность от 30% до 100% - шаг 2%.
- * Выбор режима работы с помощью кнопки CAP/RES (28).
- * Контроль предельного значения выходной мощности (26) можно включить/отключить в меню «Настройки» (17). Эта кнопка (26) используется для включения или отключения этой опции. Вы можете изменить предельное значение выходной мощности, не переходя в меню «Настройки», нажав и удерживая кнопку (26).
- * Кнопка (27) позволяет включить/отключить модуляцию выходного сигнала. При модуляции аппарат автоматически ограничивает выходную мощность.


Во время процедуры могут быть установлены следующие значения:

- Выходная мощность - используйте энкодер (5) или кнопки (12) и (13) на пульте управления.
- Время процедуры – вы можете увеличить (24) и уменьшить (25) время процедуры.

Основанная на количестве переданной энергии процедура в емкостном режиме (CAP)

На дисплее изделия отображаются следующие рабочие параметры:


32. Количество переданной энергии (кДж), установленное пользователем. После достижения заданного количества переданной энергии (заданное значение отображает счетчик переданной энергии) аппарат выдает звуковой сигнал, который отмечает конец процедуры, и прекращает подачу выходной мощности. На дисплее появляется сообщение о том, что процедура была закончена.
33. Индикатор выходного уровня мощности в %.
34. Индикатор режима работы (CAP).
35. Энергия (E), измеренная в килоджоулях (кДж): кумулятивная величина переданной с начала до текущего момента энергии.
36. Полная мощность: текущее значение полной мощности, подаваемой в ВА (вольт-амперы). Это значение представляет собой сумму резистивной мощности (активной или истинной) и реактивной мощности (изолирующей). Основной график показывает изменение этого значения за прошедшее время процедуры.
37. Выходной ток (I): текущее значение тока, протекающего через электрод и ткань, измеренное в амперах (A). В меню «Настройки» (17) вы можете выбрать значение (Ω или mA), изменение которого вы хотите показать на графике.
38. Импеданс (Z), измеренный в омах (Ω): текущее значение сопротивления ткани тела и электрода. Если появляются три тире («---»), это значение слишком велико и, следовательно, выходит за пределы шкалы, либо выходная мощность слишком низкая, чтобы правильно выполнить это измерение. Изделие может быть настроено таким образом, чтобы второй график показывал изменение этого значения за время процедуры.
39. Время (в минутах). Совокупное значение времени от начала процедуры до текущего момента.
40. Энергия (E), измеренная в килоджоулях (кДж): кумулятивная величина энергии, подаваемой в течение данного этапа процедуры.

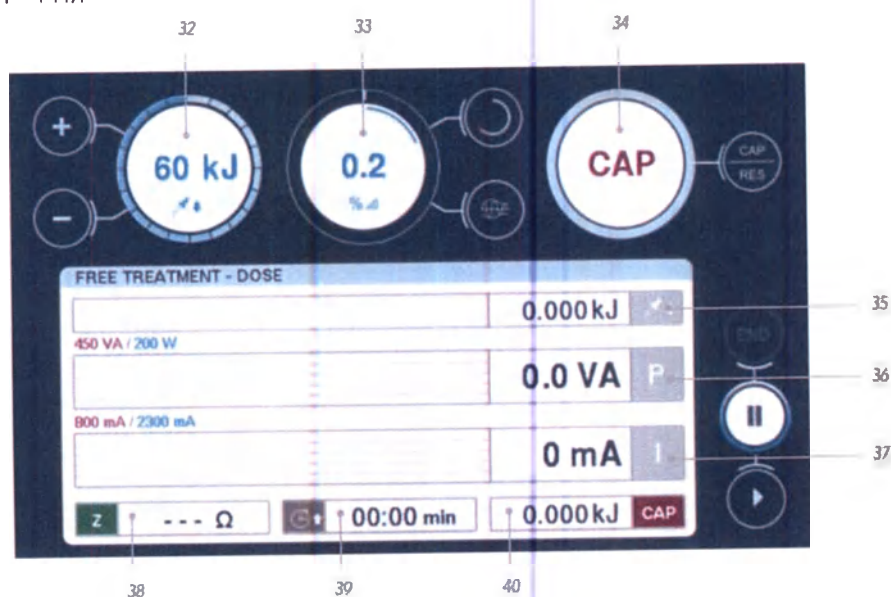

Основанная на количестве переданной энергии процедура в резистивном режиме (RES)

На дисплее аппарата отображаются следующие рабочие параметры:

32. Количество переданной энергии (кДж), установленное пользователем. После достижения заданного количества переданной энергии (заданное значение отображает счетчик переданной энергии) аппарат выдает звуковой сигнал, который отмечает конец процедуры, и прекращает подачу выходной мощности. На дисплее появляется сообщение о том, что процедура была закончена.
33. Индикатор выходного уровня мощности в %.
34. Индикатор режима работы (RES).
35. Энергия (E), измеренная в килоджоулях (кДж): кумулятивная величина энергии, подаваемой с начала процедуры до текущего момента.
36. Полная мощность: текущее значение полной мощности, подаваемой в ваттах (Вт). Основной график показывает изменение этого значения за прошедшее время процедуры.
37. Выходной ток (I): текущее значение тока, протекающего через электрод и ткань, измеренное в амперах (А). В меню «Настройки» (17) вы можете выбрать значение (Ω или мА), изменение которого вы хотите показать на графике.
38. Электрическое сопротивление (R), измеренное в Ом (Ω): текущее значение сопротивления ткани тела. Если появляются три тире («---»), это значение слишком велико и, следовательно, выходит за пределы шкалы, либо выходная мощность слишком низкая, чтобы правильно выполнить это измерение. Изделие может быть настроено таким образом, чтобы второй график показывал изменение этого значения за время процедуры.
39. Время (в минутах). Совокупное значение времени от начала процедуры до текущего момента.
40. Энергия (E), измеренная в килоджоулях (кДж): кумулятивная величина мощности, подаваемой в течение данного этапа процедуры.

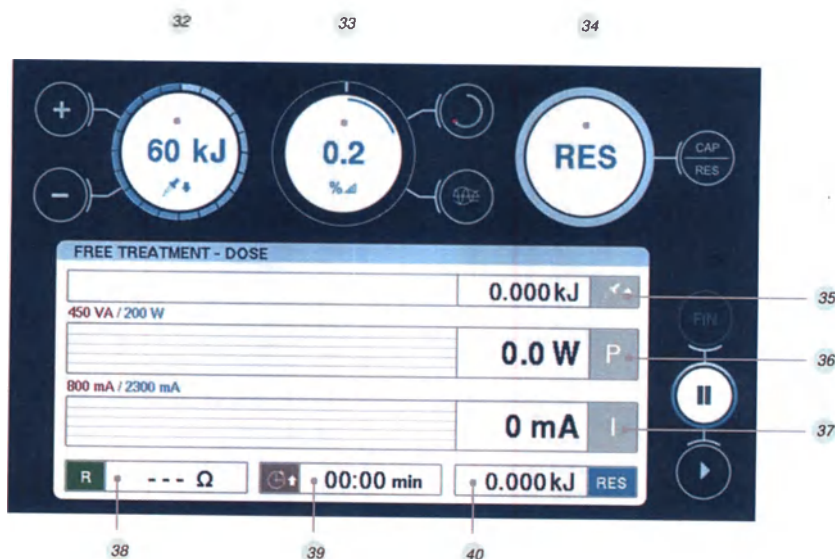


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУР

Для начала или окончания процедуры:

- Нажмите кнопку «СТАРТ» (31) на аппарате, или кнопку «СТАРТ/СТОП» на пульте управления (14), или переведите энкодер (5) в состояние «Готов к контакту».
- При обнаружении контакта электрода с пациентом замигает значок. Отсчет времени процедуры еще не начинается.
- Когда аппарат обнаруживает, что электрод касается пациента, он переключается на статус «Идет процедура», отображает выбранные параметры процедуры и начинает отсчет времени процедуры. Значок, указывающий на то, что аппарат обнаружил контакт с телом пациента, исчезает.
- Если контакт между электродом и пациентом пропадает во время процедуры, аппарат обнаруживает это и возвращается в состояние «Готов к контакту». При этом приостанавливается отсчет времени процедуры. Когда электрод снова контактирует с пациентом, аппарат переключается в состояние «Идет процедура».
- Чтобы остановить процедуру, нажмите кнопку «ПАУЗА» (30) на аппарате, или кнопку «СТАРТ/СТОП» (14) на пульте управления, или используйте энкодер (5).
- Чтобы закончить процедуру и сбросить значения общего времени процедуры и переданной энергии на текущий момент времени, нажмите кнопку «ЗАКОНЧИТЬ» (29). При нажатии на эту кнопку появляется всплывающее окно с кратким описанием различных этапов данной процедуры.
- Нажмите кнопку «ДОМОЙ» (15), чтобы вернуться на главный экран аппарата.

СОХРАНЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Нажмите кнопку (23), чтобы получить доступ к сохраненным процедурам.

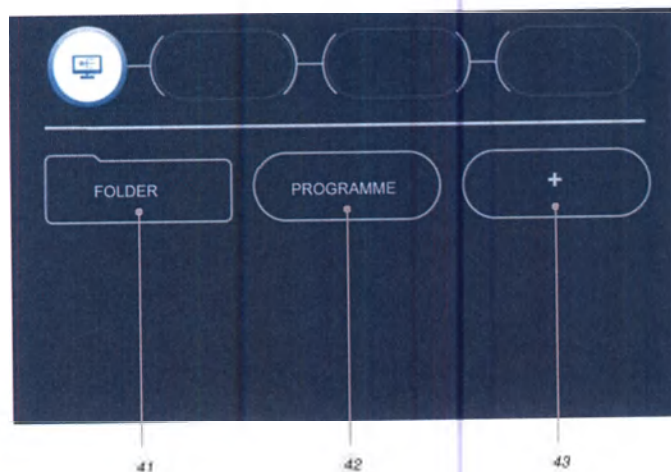

41 Кнопка выбора папки.

42 Кнопка выбора программы.

43 Кнопка добавления папки или программы.

Над разделительной линией на экране находятся кнопки навигации. Они сообщают пользователю, какая именно папка открыта на данный момент. Существует три возможных уровня. В первых двух допускаются как папки, так и программы, а третий уровень предназначен только для программ.


Кнопка, выделенная в области навигации, указывает пользователю, на каком этапе выбора сохраненной процедуры он находится.

Чтобы изменить выбор типа процедуры, пользователь должен воспользоваться кнопками над разделительной линией на дисплее.

Кнопки под разделительной линией представляют собой кнопки выбора или ввода сохраненных процедур.

Создание процедур

Чтобы создать процедуру, нажмите на кнопку (43), после чего откроется следующий экран:

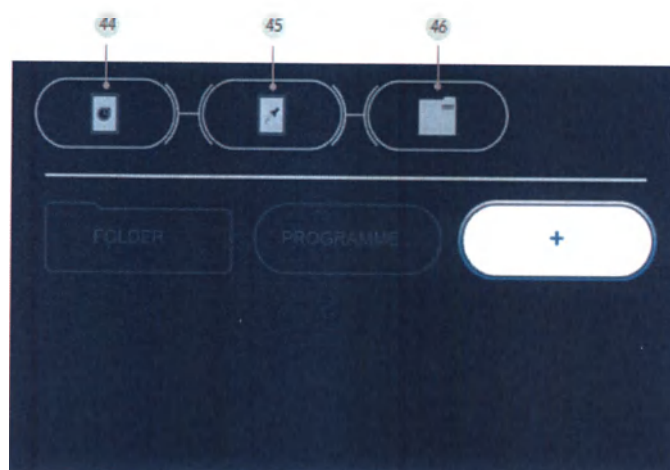

44. Создание программы, основанной на отсчете времени.


45. Создание программы, основанной на количестве переданной энергии.

46. Создание папки.

После нажатия любой из этих кнопок введите имя нового элемента и нажмите на кнопку подтверждения, чтобы продолжить работу.




- Для создания основанных на отсчете времени программ в аппарате используется следующий экран (44):

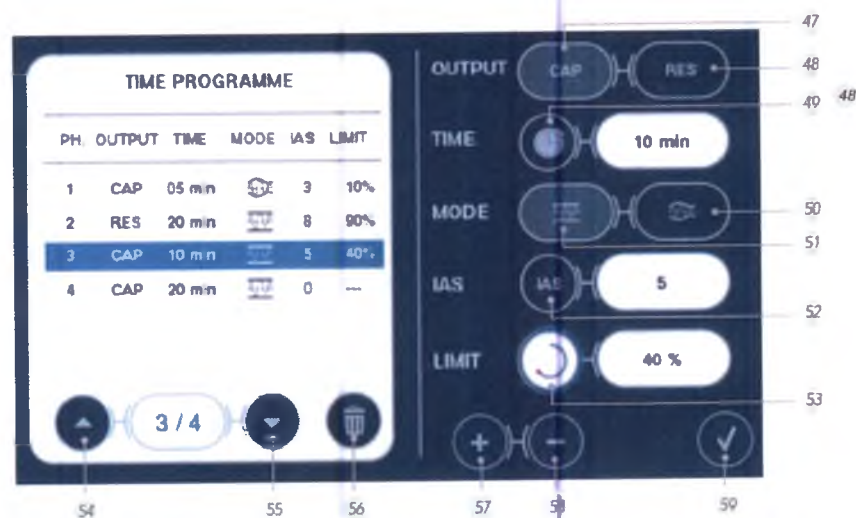


- 47 Выбор режима этапа процедуры (в данном случае CAP).
- 48 Выбор режима этапа процедуры (в данном случае RES).
- 49 Выбор времени этапа процедуры. Минимальное время составляет 1 минуту, а максимальное - 99 минут. Время можно увеличить или уменьшить с интервалом в одну минуту.
- 50 Выбор выходного сигнала (в данном случае сигнал модулируется).
- 51 Выбор выходного сигнала (в данном случае сигнал не модулируется).
- 52 Выбор значения IAS. Значения IAS могут быть увеличены или уменьшены с интервалом в 1.
- 53 Выбор предельного значения выходной мощности. Минимальное значение составляет 5%, а максимальное - 90%. Значение от 5% до 30% может быть увеличено или уменьшено с интервалом 5%. Значение от 30% до 90% может быть увеличено или уменьшено с интервалом 10%.
- 54 Выбор предыдущего этапа процедуры.
- 55 Выбор следующего этапа процедуры.
- 56 Удаление этапа процедуры.
- 57 Увеличение выбранного значения.
- 58 Уменьшение выбранного значения.
- 59 Подтверждение программы.

После нажатия кнопки подтверждения программы (59), аппарат вернется к экрану выбора, и появится новая программа.

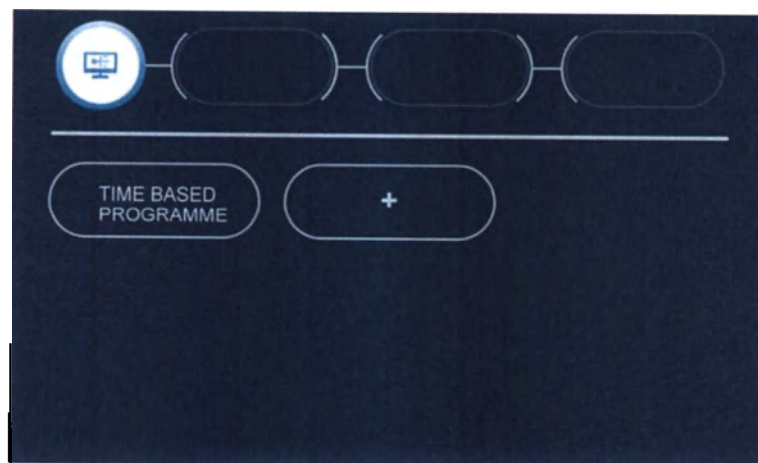

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

- Для создания основанных на количестве переданной энергии программ в аппарате используется следующий экран (45):

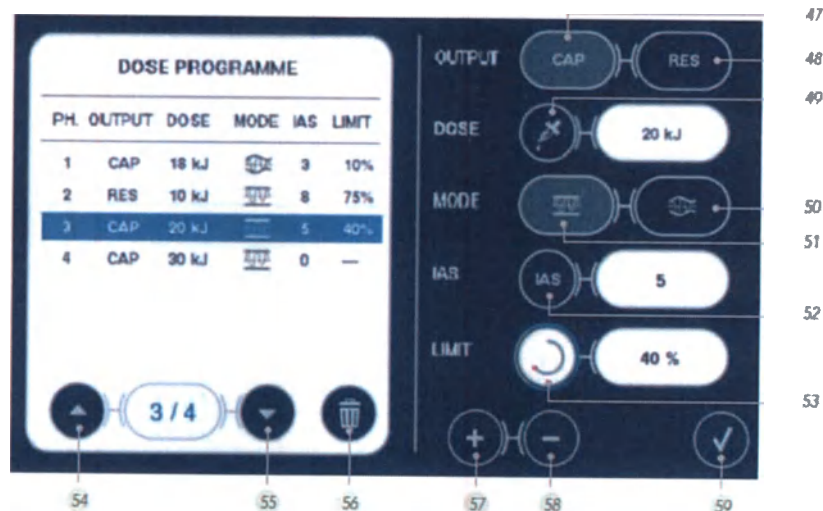

- 47 Выбор режима этапа (в данном случае CAP).
- 48 Выбор режима этапа (в данном случае RES).
- 49 Выбор количества переданной энергии этапа процедуры (минимальное значение составляет 1 кДж, а максимальное - 999 кДж, шаг изменения 1 кДж). Значение энергии можно увеличить или уменьшить на 10 кДж, нажав и удерживая кнопку определения количества переданной энергии.
- 50 Выбор выходного сигнала (в данном случае сигнал модулируется)
- 51 Выбор выходного сигнала (в данном случае сигнал не модулируется).
- 52 Выбор значения IAS. Значение IAS может быть увеличено или уменьшено с интервалом в 1 пункт.
- 53 Выбор предельного значения выходной мощности. Минимальное значение составляет 5%, а максимальное - 90%. Значение от 5% до 30% может быть увеличено или уменьшено с интервалом 5%. Значение от 30% до 90% может быть увеличено или уменьшено с интервалом 10%.
- 54 Выбор предыдущего этапа процедуры.

55 Выбор следующего этапа процедуры.


56 Удаление этапа процедуры.

57 Увеличение выбранного значения.


58 Уменьшение выбранного значения.

59 Подтверждение программы.


После нажатия кнопки подтверждения программы (59) аппарат вернется к экрану выбора, и появится новая программа.

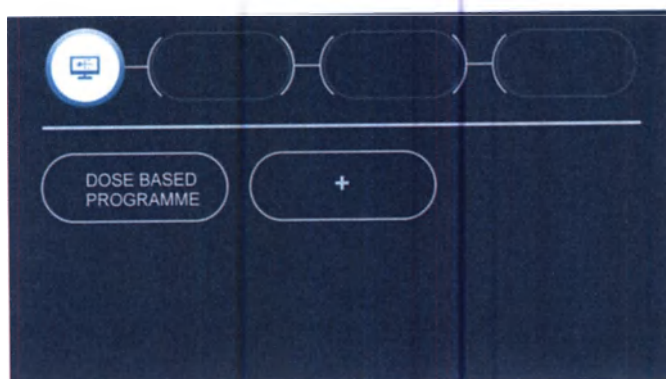


При создании папки (46) аппарат отображает ваше текущее местоположение и добавляет созданную папку:

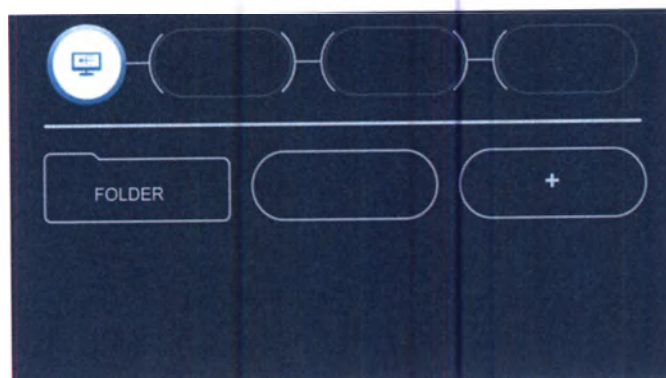

Нажмите на созданную папку, чтобы перейти на новый уровень в структуре, где вы можете создать новую программу или папку:

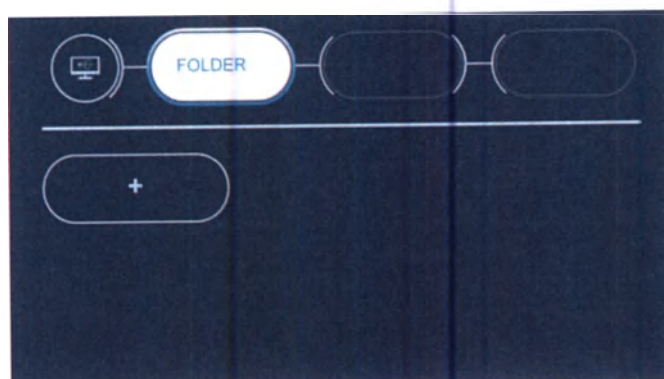


На последнем уровне можно добавлять только программы:

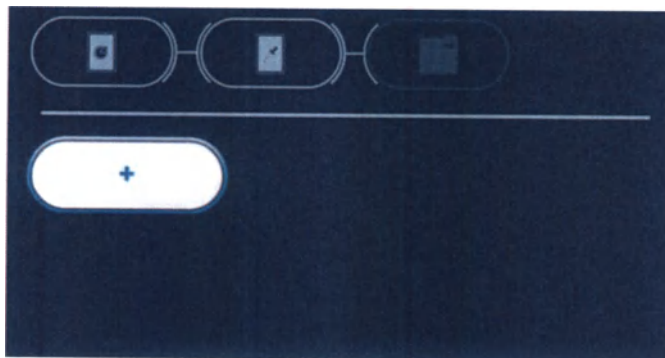

Управление папками

Для управления папкой зажмите соответствующую кнопку в течение 5 секунд, после чего появятся следующие опции:

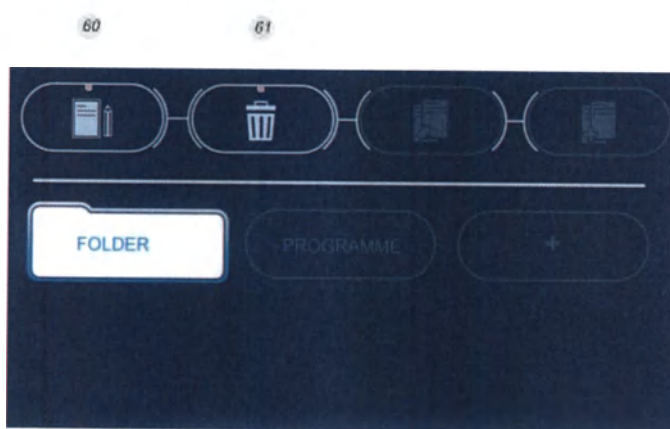

60. Редактировать название папки.

61. Удалить папку (это возможно только в том случае, если папка пуста).

Примечание: Предустановленные папки **INDIBA** не могут быть изменены, удалены, перемещены или дублированы.

Управление программами

Для управления программой зажмите соответствующую кнопку в течение 5 секунд, после чего появятся следующие опции:





- 60 Изменить программу.
- 61 Удалить программу.
- 62 Переместить программу в папку или подпапку.
- 63 Копировать программу в папку или подпапку.

Примечание: Предустановленные папки INDIBA не могут быть изменены, удалены, перемещены или дублированы. Их можно только продублировать для использования в качестве шаблона для новой сохраненной программы.



Изменение папок и программ

Чтобы выйти из программы без сохранения изменений, нажмите на кнопку со стрелкой (16). Если вы сохраните изменения, на экране появится сообщение о том, что изменения были успешно внесены:

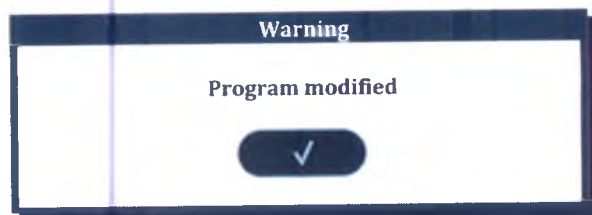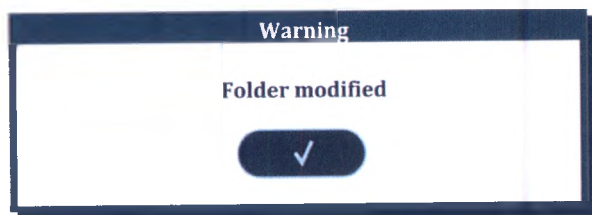


Удаление папок и программ

Чтобы выйти из программы без сохранения изменений, нажмите на кнопку со стрелкой (16). Если вы сохраните изменения, на экране появится сообщение о том, что изменения были успешно внесены:

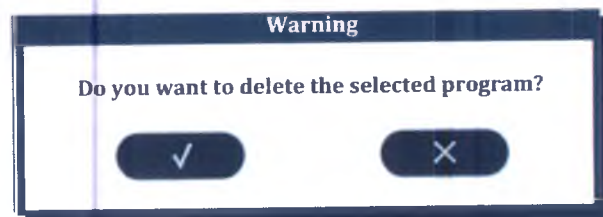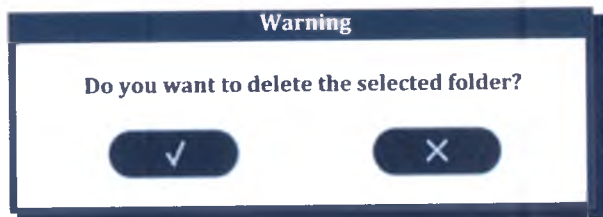

Если папку невозможно удалить, на экране появляется следующее сообщение о том, что папку невозможно удалить, так как она содержит данные:

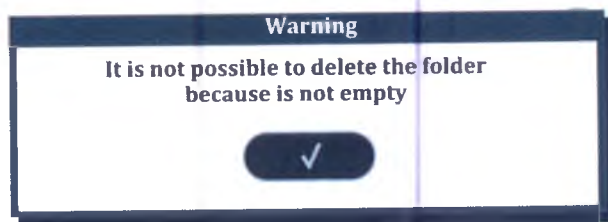


Примечание: Перед удалением убедитесь, что папка является пустой.

Перемещение программ

Открывайте папки и подпапки до тех пор, пока не окажетесь там, куда вы хотите переместить программу (текст элемента, который будет перемещен, станет зеленым). Нажмите на элемент, чтобы подтвердить, что вы хотите переместить программу.


На экране появится сообщение, информирующее пользователя о том, что программа была корректно перемещена:

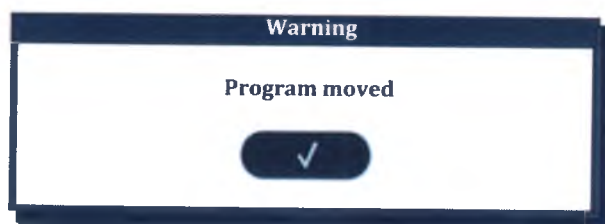

Копирование программ

Открывайте папки и подпапки до тех пор, пока вы не окажетесь там, куда вы хотите переместить программу (текст элемента, который будет перемещен, станет зеленым). Нажмите на элемент, чтобы подтвердить, что вы хотите скопировать программу.


На экране появится сообщение, информирующее пользователя о том, что программа была корректно скопирована:

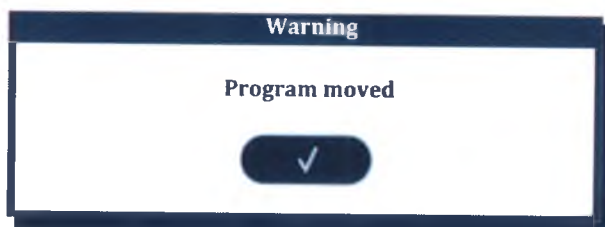

Загрузка сохраненных процедур

Используя кнопки под разделительной линией экрана, открывайте папки и подпапки до тех пор, пока не найдете соответствующую программу.

При нажатии кнопок они появляются над разделительной линией.

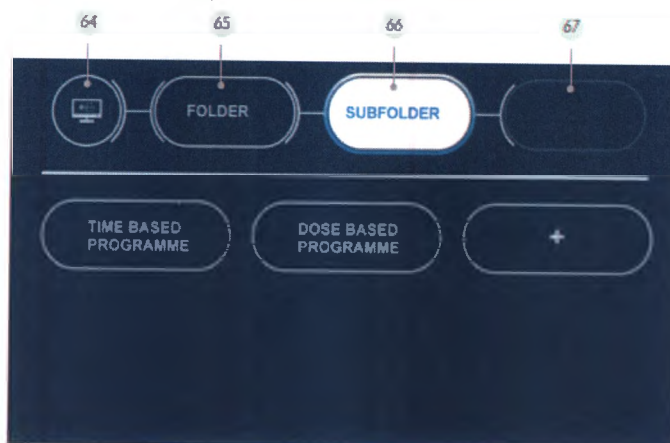

64. Экран сохраненных процедур.


65. Выбранная папка.

66. Выбранная вложенная папка. Текущее положение.

67. Папка или программа, которую необходимо выбрать.

Если пользователь не нашел необходимую программу, он может вернуться назад с помощью кнопок 64, 65 и 66, либо использовать кнопку навигации для возврата к предыдущему экрану (16).

После выбора программы аппарат показывает различные этапы сохраненной программы, которые будут использоваться во время процедуры:

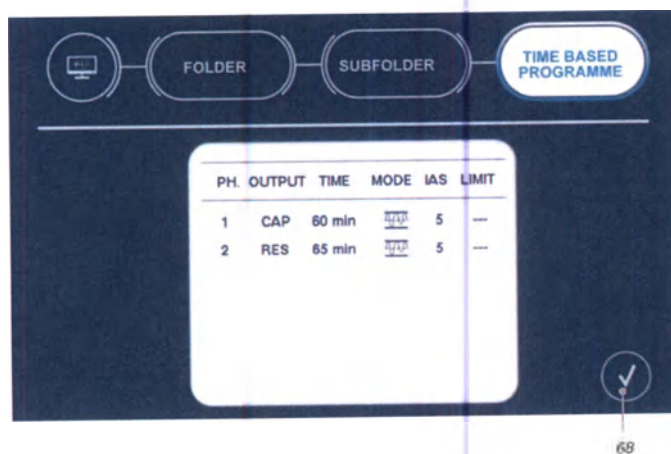

68 Загрузка программы.

Если пользователь ошибся при выборе программы, он может вернуться к предыдущему экрану только с помощью кнопки навигации (16).

При нажатии кнопки (68) программа выводит экран выбранной процедуры.


ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ INDIBA

В сохраненных процедурах (23) вы можете найти предустановленные процедуры, созданные компанией INDIBA. Такие папки и/или программы идентифицируются по следующему значку:



Меню настроек

Нажмите кнопку «Настройки» (17), чтобы перейти в меню настроек.

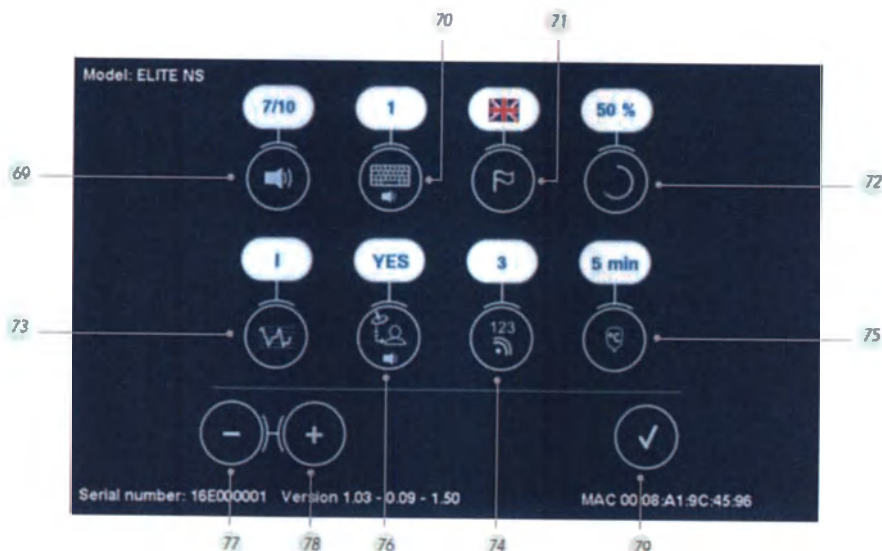

Вы можете использовать кнопки на этом экране, чтобы:

69. Изменить уровень громкости аппарата.
70. Изменить звук, выдаваемый аппаратом при нажатии кнопки.
71. Выбрать язык.
72. Отключить контроль значения выходной мощности или установить предельное значение мощности: от 5% до 30% (интервал 5%) и от 30% до 90% (интервал 10%).
73. Выбрать значение (Ω или mA), чтобы показать его изменение во время процедуры на графике выходного тока.
74. Изменить номер канала, используемый для беспроводной связи с пультом управления.
75. Изменить время нагрева возвратного плоского электрода.
76. Включить или выключить звук обнаружения контакта.
77. Уменьшить значение выбранного параметра.
78. Увеличить значение выбранного параметра.
79. Сохранить изменения.

Программа мониторинга

Кнопка программы мониторинга (18) обеспечивает включение или отключение беспроводного подключения к удаленному компьютеру для передачи значений параметров, измеренных аппаратом во время процедуры.

Дополнительная информация о том, как работает программа мониторинга, приведена в приложении 1.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ИНДИКАТОРА КНОПКИ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА

Цвет кнопки отображает состояние связи. Когда значок программы мониторинга:

- **Белого цвета и не мигает**, соединение Wi-Fi отключено.
- **Белого цвета и мигает**, соединение Wi-Fi включено и ожидает подключения для передачи данных.
- **Синего цвета и мигает**, было установлено соединение для передачи данных, но данные не отправляются в программу мониторинга.
- **Синего цвета и не мигает**, соединение выполнено, а аппарат отправляет данные для хранения.

Нагрев плоского возвратного электрода

ВАЖНО: эта функция доступна только в том случае, если аппарат установлен на стойке-тележке. Прежде чем активировать эту функцию, пользователь должен подключить аппарат к стойке-тележке с помощью соединительного кабеля и убедиться, что выбранное значение напряжения на стойке-тележке соответствует существующему сетевому напряжению.

Кнопка нагревания возвратной пластины (19) используется для включения или отключения нагрева возвратной пластины

Время нагрева можно изменить в меню «Настройки» (17).

Цвет кнопки указывает статус:


- **Белого цвета и не мигает** - нагрев отключен.
- **Желтого цвета и не мигает**, нагрев отключен.
- **Желтого цвета и мигает**, нагрев скоро будет отключен.

Если вы нажмете на кнопку во время нагрева, отсчет времени прервется.

Информация об использовании аппарата

При нажатии кнопки информации об использовании аппарата (20) на экране появляется сообщение со следующими краткими данными:

- Количество процедур, выполненных на аппарате.
- Общее время процедур, выполненных на аппарате.
- Общее время процедур, выполненных на аппарате в режиме CAP.
- Общее время процедур, выполненных на аппарате в режиме RES.
- Количество времени, оставшееся до следующего технического обслуживания.

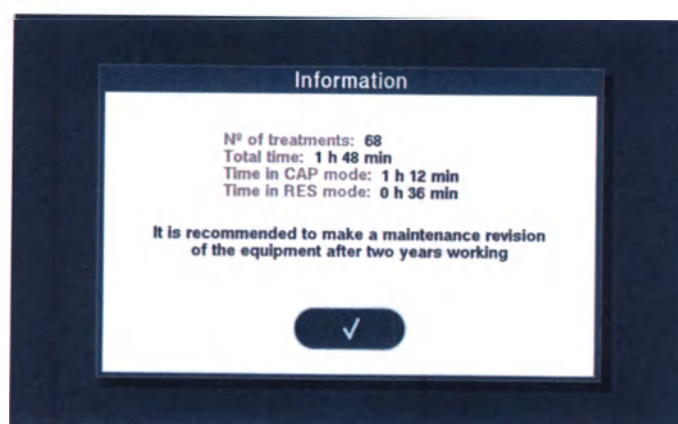

КНОПКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА

Кнопка информации об использовании аппарата (20) указывает пользователю, когда необходимо выполнить техническое обслуживание аппарата.

- Кнопка белого цвета и не мигает. Это означает, что еще есть время до следующей даты обслуживания аппарата.
- Кнопка синего цвета и не мигает. Это означает, что обслуживание аппарата необходимо выполнить в ближайшее время.
- Кнопка красного цвета и не мигает. Это означает, что день обслуживания аппарата уже прошел.

Пользователь должен связаться со своим дилером или службой поддержки клиентов INDIBA для обслуживания аппарата.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА

53

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª,
DOY FE

[Handwritten signature]

Иконки

Во время процедуры в нижней части экрана могут мигать следующие значки желтого цвета:




80. Выбранное выходное значение не может быть достигнуто, потому что значение сопротивления, обнаруженное аппаратом, слишком велико.

81. Обнаруженный емкостный электрод слишком велик для этого аппарата.

82. Этот значок появляется в емкостном режиме (CAP), когда аппарат настраивает свои внутренние параметры для адаптации к обнаруженному электроду и оптимизации производительности.

83. Устройство обнаружило контакт электрода с пациентом.

Если аппарат не может обнаружить подключение рукояток для электродов, он прекратит процедуру и выдаст для пользователя всплывающее сообщение на экране:

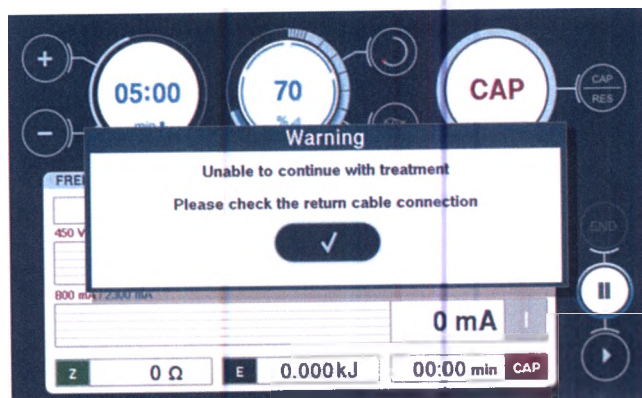

Пользователю необходимо проверить соединение кабеля, указанного в сообщении.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления поставляется с одной батареей типа таблетка.

Если аппарат не реагирует на пульт управления, возможно, необходимо заменить батарейку.

Вытащите батарейку из пульта управления, если он не будет использоваться в течение длительного времени.



Когда батарейка в пульте управления разряжается, на дисплее аппарата появится немигающий желтый значок.

85. Батарейка в пульте управления разряжена, ее необходимо заменить как можно скорее. Следуйте этим инструкциям, чтобы заменить батарейку:

- Снимите крышку отсека для батарейки.
- Вытащите разряженную батарейку.
- Вставьте новую батарейку в отсек для батарейки.
- Поставьте на место крышку отсека для батарейки.
- Утилизируйте старую батарейку в пункте переработки.

По истечении срока эксплуатации аппарата перед его утилизацией вытащите батарейку из пульта управления и отправьте ее в пункт переработки для экологически безопасной утилизации.



ИКОНКИ

55

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020, Sección 2ª,
DOY FE

Элементы изделия

ТИПЫ ЭЛЕКТРОДОВ

В аппарате используются следующие типы электродов:

- Возвратные
- Емкостные
- Резистивные

ВОЗВРАТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

В качестве возвратного электрода выступают два типа электродов:


- Возвратный цилиндрический электрод.
- Возвратный плоский электрод.

Возвратный плоский электрод следует использовать, когда диаметр активного электрода (емкостного или резистивного) больше 40 мм. При использовании активного электрода (емкостного или резистивного) с меньшим диаметром можно использовать плоский или цилиндрический возвратный электрод, в зависимости от ощущений пациента, области, подлежащей обработке, и т. д.

ВАЖНО: Необходимо использовать возвратный электрод (плоский либо цилиндрический), чтобы ток мог циркулировать.


Возвратный плоский электрод является гибким, что позволяет лучше адаптироваться к анатомии тела пациента. Однако необходимо учитывать следующие пределы изгиба возвратного плоского электрода:

- В поперечном направлении (А) возвратный плоский электрод не может быть согнут более чем на 30° по горизонтали.
- В продольном направлении возвратный плоский электрод не может быть согнут более чем на 90° при условии, что давление применяется на крайние части возвратного плоского электрода (В).
- НИКОГДА не сгибайте возвратный плоский электрод в продольном направлении, применяя давление в точках, близких к линии сгиба (С), поскольку это надолго деформирует возвратный плоский электрод, что делает невозможным возвращение к его исходной форме.

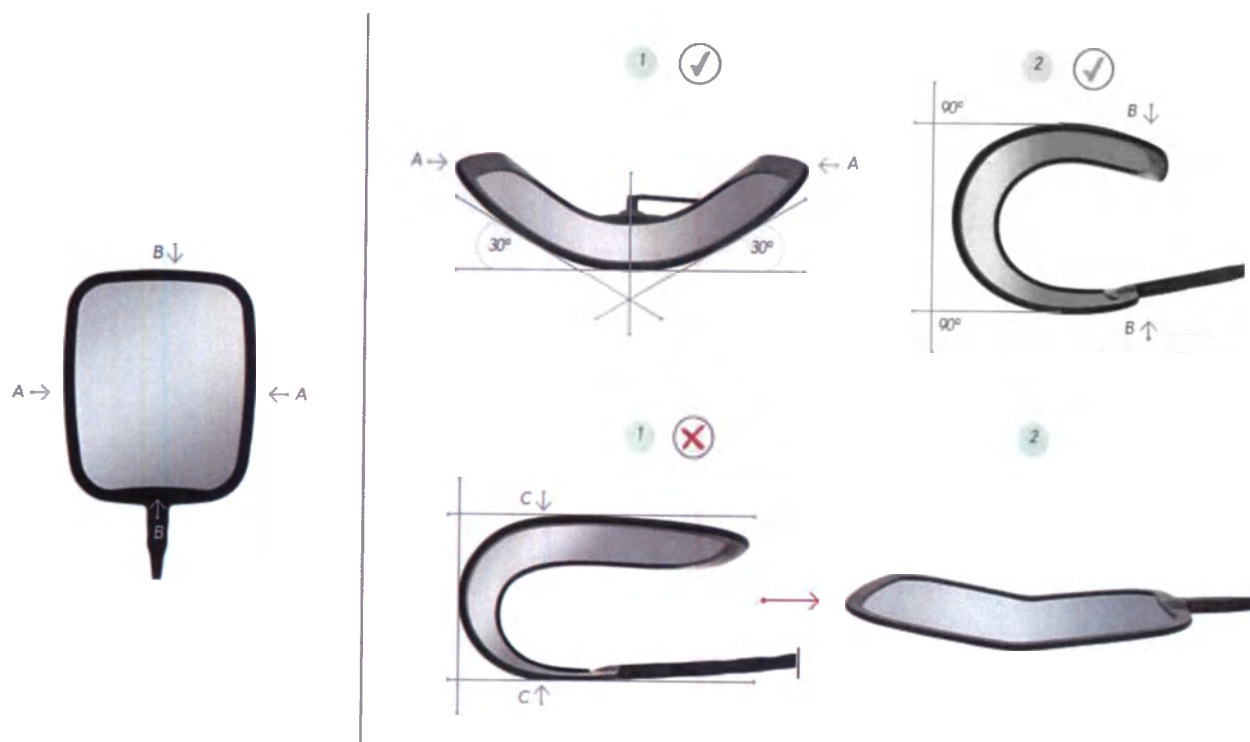

РУКОЯТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ САР


В изделии могут использоваться только емкостные электроды диаметром вала 3 мм и канавкой на вале. Эта канавка помогает зафиксировать электрод в необходимом положении на рукоятке для электродов.

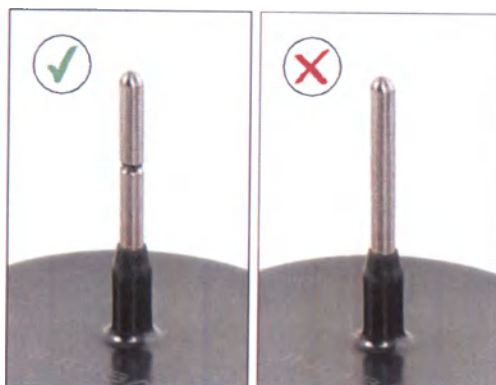

На Рис. 1-4 представлены этапы фиксации емкостного электрода на рукоятке для электродов:


1. Вставьте защитную втулку в рукоятку для электродов.
2. Вставьте вал электрода в отверстие до упора.

- 3 Отпустите защитную втулку, чтобы вернуть ее в исходное положение.
- 4 Аккуратно потяните электрод, пока не услышите щелчок. Это указывает на то, что канавка на валу правильно установлена в рукоятке для электродов.

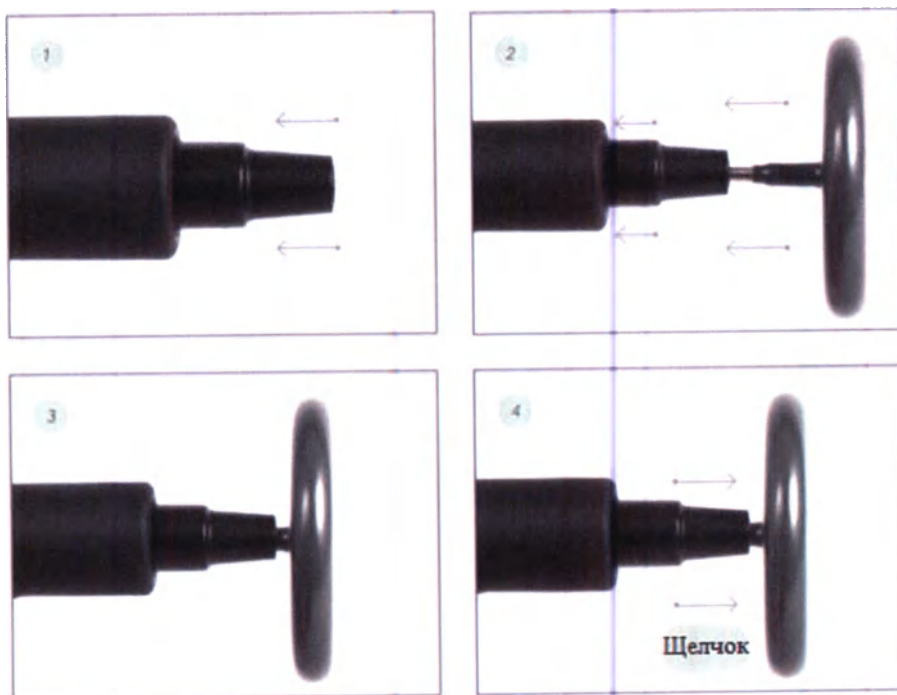

На рисунках 1-3 представлены этапы снятия емкостного электрода с рукоятки для электродов:


- 1 Вставьте защитную втулку в рукоятку для электродов.
- 2 Вытащите емкостный электрод из рукоятки для электродов.
- 3 Отпустите защитную втулку, чтобы вернуть ее в исходное положение.

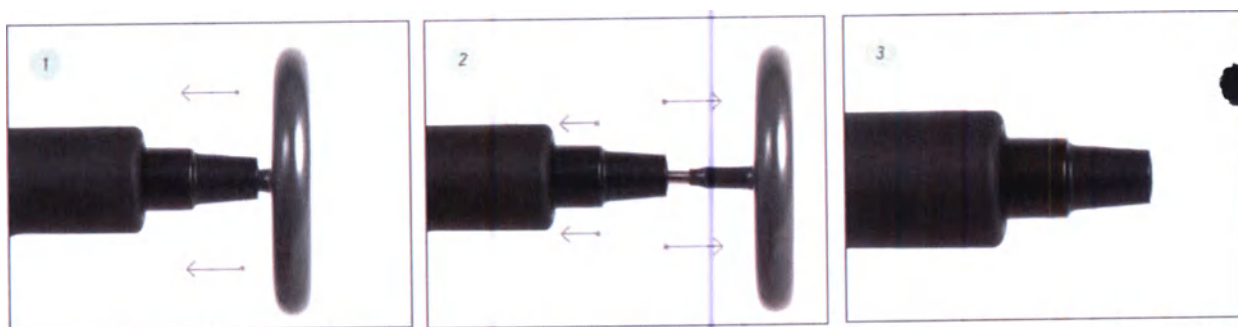

ВАЖНО: Чтобы вставить, вытащить или заменить электрод, процедуру необходимо поставить на ПАУЗУ. Не начинайте процедуру, если вы не услышите щелчок, указывающий на фиксацию электрода. В противном случае электрод может упасть во время процедуры и сломаться.


РУКОЯТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ RES

В аппарате могут использоваться только резистивные электроды с валом диаметром 6 мм и канавкой на валу. Эта канавка помогает зафиксировать электрод в необходимом положении на рукоятке для электродов.

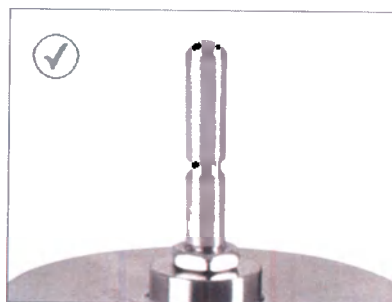

На рисунках 1-4 представлены этапы фиксации резистивного электрода на рукоятке для электродов:

- 1 Вставьте защитную втулку в рукоятку для электродов
- 2 Вставьте вал электрода в отверстие до упора.
- 3 Отпустите защитную втулку, чтобы вернуть ее в исходное положение.
- 4 Аккуратно потяните электрод, пока не услышите щелчок. Это указывает на то, что канавка на валу правильно установлена в рукоятке для электродов.

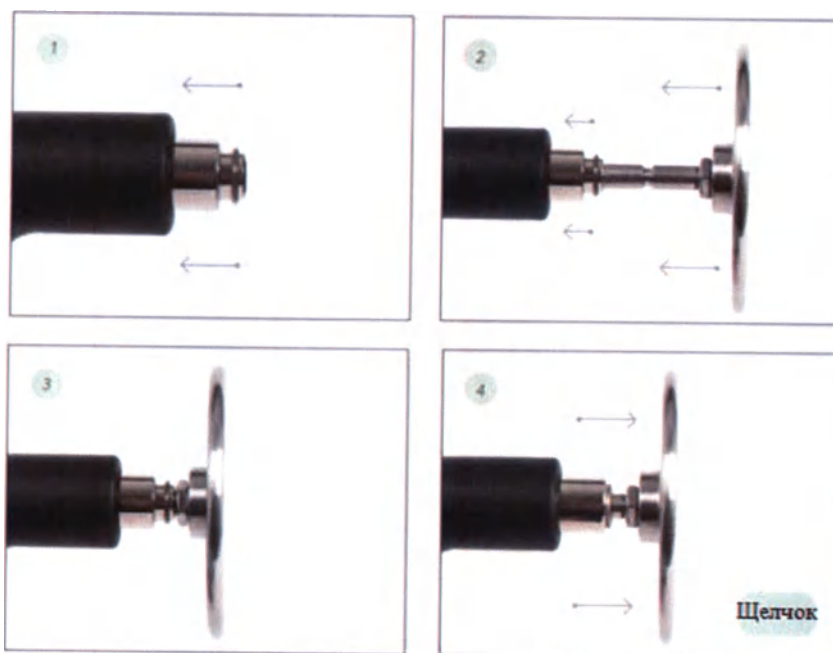

На Рис. 1-3 представлены этапы снятия емкостного электрода с рукоятки для электрода:

- 1 Вставьте защитную втулку в рукоятку для электродов.
- 2 Вытащите резистивный электрод из рукоятки для электродов.
- 3 Отпустите защитную втулку, чтобы вернуть ее в исходное положение.



ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

59

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª
. DOY FE

Handwritten signature

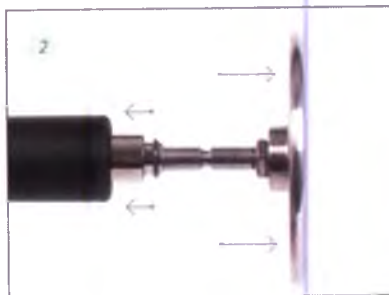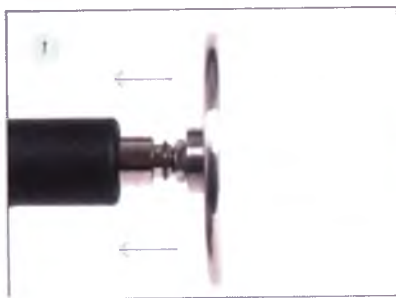

ВАЖНО: Чтобы вставить, вытащить или заменить электрод, процедуру необходимо поставить на ПАУЗУ. Не начинайте процедуру, если вы не услышите щелчок, указывающий на фиксацию электрода. В противном случае электрод может упасть во время процедуры и сломаться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Чтобы начать процедуру:

- Соответствующим образом зафиксируйте возвратный электрод на теле пациента.
- Соответствующим образом установите активный электрод на рукоятку для электродов.
- Нанесите электропроводящий крем на область тела пациента, которая будет обрабатываться, и на возвратный электрод.



РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА И ВОЗВРАТНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ТЕЛЕ ПАЦИЕНТА

На рисунке ниже представлено рекомендуемое размещение активного электрода и возвратного электрода на основе того, какая область тела подлежит обработке.

1. Ремоделирование кожи

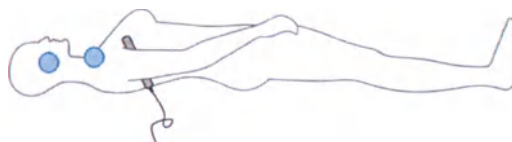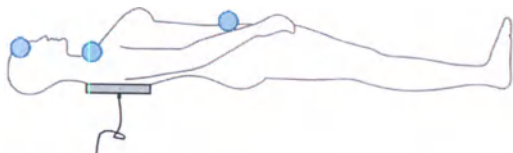


2. Контуринг тела

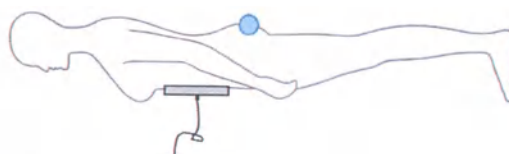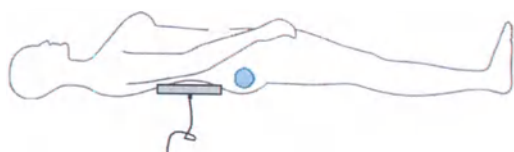


3. Антицеллюлитные программы




4. Послеоперационное восстановление

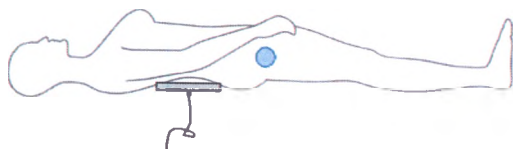

Липосакция

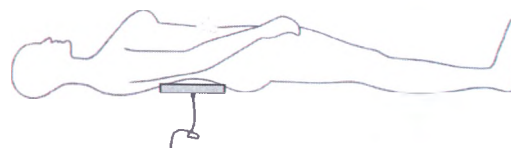

Абдоминопластика

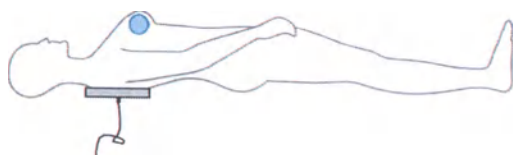

Маммопластика



Подтяжка лица


ВАЖНО: Никогда не используйте аппарат, если возвратный электрод не был соответствующим образом зафиксирован. Несоблюдение этого требования может привести к ожогам тела пациента.

ВАЖНО: Не используйте электроды на теле пациента до тех пор, пока вы полностью не изучите это руководство по эксплуатации и не пройдете курс обучения, предоставляемый производителем при покупке аппарата.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Емкостные электроды (CAP)

Электрод всегда должен контактировать с кожей. Во время процедуры электрод должен двигаться. Используйте круговые, линейные или и те, и другие движения в соответствии с рекомендациями или протоколами лечения.

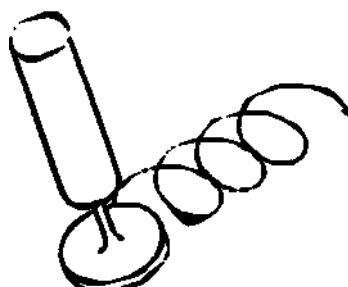

Приложите умеренное давление и двигайтесь вперед широкими круговыми движениями.

Электрод должен плотно прилегать к коже. Использование электрода под углом, при котором наблюдается только частичный контакт с кожей, может вызвать преждевременный износ кромок электрода, увеличить риск ожогов и снизить эффективность процедуры.



Емкостной электрод (CAP).

Для получения оптимальных результатов лечения необходимо соблюдать три ключевых момента:

Давление

Приложенное давление должно быть более или менее таким, как если бы использовался большой ластик. В этих условиях наблюдается минимальное электрическое сопротивление и обеспечивается наилучший физический контакт.

Скорость

В каждом круге электрод должен перемещаться на расстояние, равное 50% от его диаметра. Электрод должен двигаться постоянно при скорости примерно одно вращение в секунду.

Температура

Выберите удобную температуру процедуры. Пациент должен чувствовать тепло, но это ощущение не должно доставлять дискомфорта.

Отношение диаметра емкостного электрода (CAP) к минимальному и максимальному полезному времени процедуры для площади 100 см².


Диаметр (мм)	Мин. время (мин)	Макс. время (мин)
30	10	20
40	5	10
55	2:30	5
65	1:30	3
80	1	2

Приведенная длительность является приблизительной. Точное значение выбирается.
В данной таблице представлена связь диаметра емкостных электродов (CAP) к времени процедуры.

ВАЖНО: Если было обнаружено повреждение емкостного электрода, его необходимо заменить.
Несоблюдение этого требования может привести к незначительным ожогам кожи пациента.

Резистивные электроды (RES)

Электрод всегда должен контактировать с кожей. Во время процедуры электрод должен двигаться. Используйте круговые, линейные или те, и другие движения в соответствии с рекомендациями или протоколами лечения.

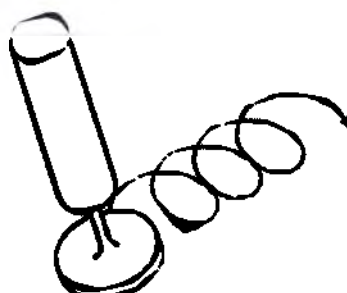

Приложите умеренное давление и двигайтесь вперед широкими круговыми движениями

Электрод должен плотно прилегать к коже. Использование электрода под углом, при котором наблюдается только частичный контакт с кожей, может вызвать преждевременный износ кромок электрода, увеличить риск ожогов и снизить эффективность процедуры..



Резистивный электрод (RES).

ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

63

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY EE.

Для получения оптимальных результатов лечения необходимо соблюдать три ключевых момента:

Давление

Приложенное давление должно быть более или менее таким, как если бы использовался большой ластик. В этих условиях наблюдается минимальное электрическое сопротивление и обеспечивается наилучший физический контакт.

Скорость

В каждом круге электрод должен перемещаться на расстояние, равное 50% от его диаметра. Электрод должен двигаться постоянно при скорости примерно одно вращение в секунду.

Температура

Выберите удобную температуру процедуры. Пациент должен чувствовать тепло, но это ощущение не должно доставлять дискомфорта.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед началом процедуры в резистивном режиме сначала рекомендуется выполнить процедуру в емкостном режиме.

- Время процедуры: устанавливается по усмотрению специалиста, основываясь на параметрах процедуры и области обработки. Продолжительность процедуры может варьироваться от 20 минут для процедур, проводимых на лице, и до 50 минут для процедур, проводимых на теле.
- Эффективность процедуры определяется двумя основными факторами: продолжительностью и уровнем выходной мощности.
- Жесткие волосы необходимо удалить из области обработки.
- Резистивный режим может иногда вызывать внутренний дискомфорт у пациентов в области обработки. Уменьшите выходную мощность до уровня, при котором пациент чувствует тепло, но не испытывает дискомфорта.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1. Кабели должны храниться отдельно друг от друга, проходить по естественной траектории, создаваемой весом самого кабеля.
2. Не перетягивайте и не сгибайте кабели. Кабели не должны быть запутанными или перекрученными, так как это может привести к их преждевременному повреждению.



3. Отсоедините кабель от аппарата так, как показано на рис.
4. Не тяните кабель, чтобы отсоединить его.



[Handwritten signature]

Электропроводящие крема производства компании INDIBA

Крема электропроводящие производства компании INDIBA были разработаны специально для аппаратов производства компании INDIBA.

Нанесите электропроводящий крем на кожу обрабатываемого участка (толщина слоя должна составлять не менее 1 мм). Добавьте электропроводящий крем во время процедуры, если заметите, что он потерял свои первоначальные свойства.

Нанесите электропроводящий крем на возвратный электрод перед началом процедуры.

Электропроводящие крема производства компании INDIBA обладают двумя основными преимуществами для пациента:

- Они уменьшают электрическое сопротивление контакта электрод-кожа, тем самым оптимизируя поток тока через тело.

- Они минимизируют трение между кожей и электродом, позволяя электроду плавно скользить по коже. На упаковке указывается состав крема, партия и срок годности.

Очистка и дезинфекция изделия

ОЧИСТКА АППАРАТА

- Всегда держите аппарат в хорошем состоянии. Периодически очищайте его от пыли и других загрязнений мягкой слегка увлажненной тряпочкой. Не допускайте попадания капель воды в разъемы аппарата. Не используйте агрессивные или окисляющие вещества, такие как отбеливатель или аммиак.

Очистка и дезинфекция активных электродов, возвратных электродов и рукояток для электродов

До и после каждой процедуры

- Всегда очищайте активные, возвратные электроды и рукоятки для электродов до и после каждого использования.
- Используйте безворсовую ткань или полотенце для очистки излишков электропроводящего крема с активных электродов, возвратных электродов и рукояток для электродов.
- Затем активные, возвратные электроды и рукоятки для электродов необходимо продезинфицировать с помощью дезинфицирующей салфетки, подходящей для неинвазивных медицинских инструментов, или мягкого мыльного раствора и воды. Высушите перед использованием.
- Для очистки каждого элемента рекомендуется использовать новую салфетку.

Емкостные (CAP) электроды не предназначены для стерилизации. Стерилизация может повредить покрытие. Массажную насадку после каждого использования следует промыть мыльной водой, а после высушить.

При проведении гинекологических процедур:

Электрод RES продольный:

Только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глютаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP продольный:

Только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Протрите рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

Ремонт и техническое обслуживание

Ежедневный осмотр

Перед использованием аппарата убедитесь, что возвратные и активные электроды, рукоятки для электродов находятся в хорошем состоянии: корпус цел, покрытие кабелей не повреждено. Обратите особое внимание на покрытие на емкостных электродах, оно не должно быть повреждено.

Не используйте поврежденные или неисправные элементы изделия. При необходимости ремонта или замены свяжитесь с производителем или вашим официальным дилером.

Ремонт изделия может выполняться только авторизованными специалистами или сервисными центрами. Свяжитесь с производителем, чтобы получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре.

Периодические проверки сервисным инженером должны проводиться не реже одного раза в два года.

ВАЖНО: При обнаружении любого дефекта или неисправности НЕ используйте данное изделие, а сообщите квалифицированному техническому специалисту.

Во избежание поражения электрическим током, самостоятельно НЕ разбирайте изделие.

Маркировка и упаковка

Маркировка

Маркировка элементов изделия может содержать следующие применимые параметры, символы и обозначения:

Наименование изделия;

Наименование элемента изделия;

Входные электрические параметры: напряжение, частота электропитания, мощность;

Класс защиты от поражения электрическим током;

Параметры электромагнитной совместимости;

Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ;

Информация о плавких предохранителях;

Выходные данные: выходная мощность в режиме CAP и RES, частота



Символ «Серийный номер» с указанием серийного номера;



Символ «Номер по каталогу» с указанием номера по каталогу;



Символ «Использовать до». Указывает дату, после истечения которой изделие не должно использоваться;



Символ «Номер по каталогу». Указывает номер медицинского изделия по каталогу изготовителя;



Символ «Дата изготовления» с указанием даты изготовления;



Символ «Информация о производителе» с указанием наименования производителя и адреса (дополнительно: телефона и факса);



Символ «Рабочие части типа BF без защиты от разряда дефибриллятора»;



Символ «Директива WEEE - не выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами»;



Символ «Знак соответствия CE» с (или без) указанием номера нотифицирующего органа;



Без использования парабенов;



Обратитесь к руководству по эксплуатации изделия;



После окончания использования упаковку следует выбросить в урну;



Упаковка изделия сделана из пластика и поддается промышленной переработке;



Срок хранения после вскрытия упаковки;

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª,
DOY FE

Handwritten signature

Аппарат радиочастотный гипертермический

REF

Вариант исполнения: ELITE NS

SN

Предохранитель: 2 х Т 4 А L 250В



Выходная мощность:

RES: 200 Вт, CAP: 450 ВТ

Выходная частота: 448 Кгц



Питание: 100 – 240В, 50-60Гц, 360 ВА
(при 100В), 352 ВА (при 240В)



Класс электробезопасности: I класс

Электромагнитная совместимость:
группа 1, класс Б.



Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания

C/Moianés, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192
Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Spain

Информация о уполномоченном представителе
производителя на территории РФ: Общество с ограниченной
ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от

Рис. 45 Проект маркировки блока основного ELITE NS (для блока основного RGN – аналогично)

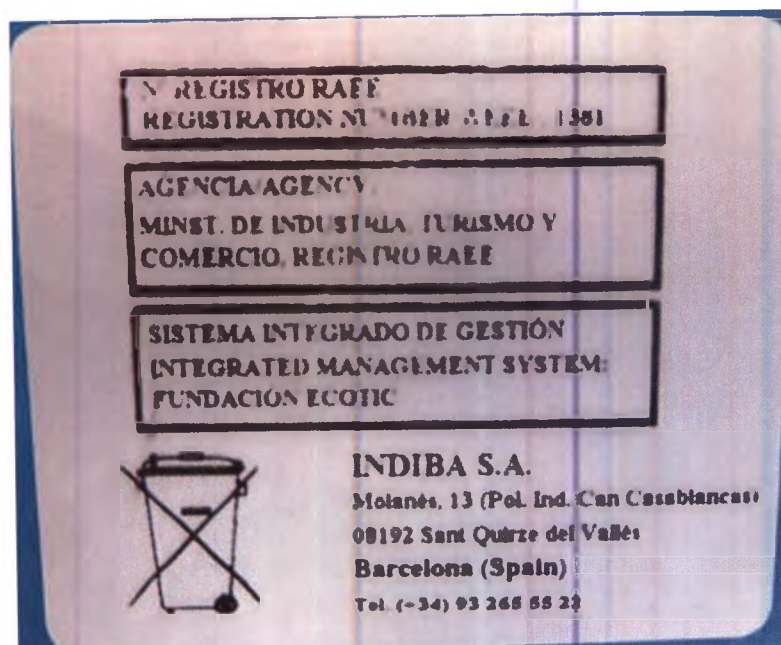


Рис. 46 Дополнительная маркировка аппарата, для России неприменима

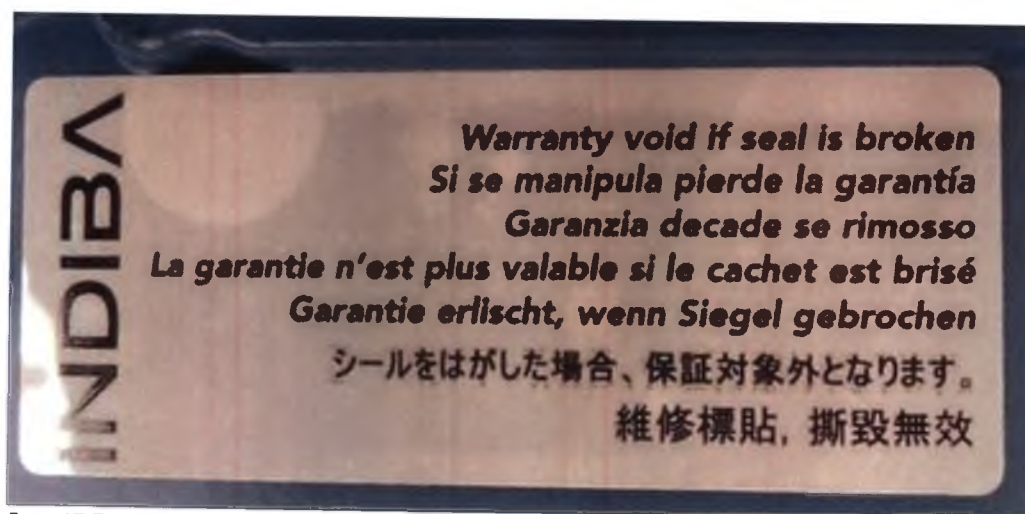


Рис. 47 Гарантийная пломба аппарата «Гарантия аннулируется, если пломба повреждена»



Рис. 48 Маркировка на задней стороне аппарата, содержащая уникальный идентификационный номер изделия

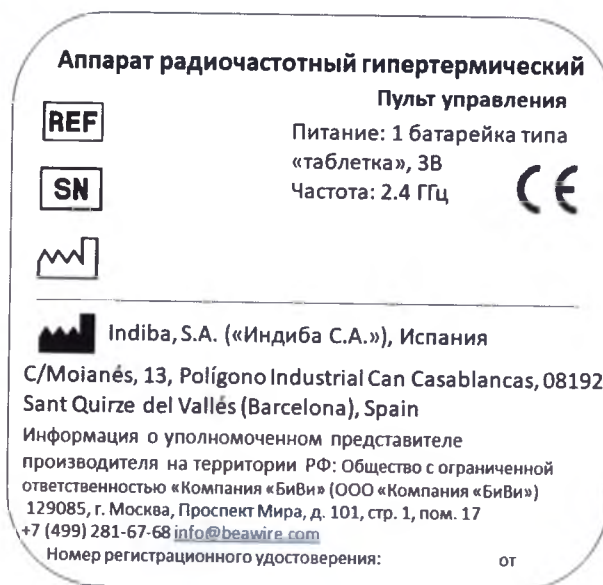


Рис. 49 Проект маркировки пульта управления



Рис. 50 Маркировка в упаковке аппарата о порядке извлечения изделия из упаковки



INGREDIENTS
INGREDIENTES
COMPOSITION
INGREDIENTI
INGREDIENTES
INHALTSSTOFFE
INGREDIËNTEN

成分
원료

Aqua
PEG-6 Stearate
Propylene Glycol
Paraffinum liquidum
Hydrogenated Palm/palm kernel oil PEG-6 esters
Caprylic/capric Triglyceride
Glycol Stearate
PEG-32 Stearate
Sodium Sulphate
PEG-75 Lanolin
Fucus Vesiculosus Extract
Dipropylene Glycol
Commiphora Mukul Resin Extract
Coleus Forskohli Root Extract
Aesculus Hippocastanum Extract (Horse Chestnut)
Parfum
Benzyl Alcohol
Triethanolamine
Salicylic Acid
Glycerin
Sorbic Acid

Copyright 2010 Indiba E. de. All rights reserved. Made in Spain.

IT ISTRUZIONI PER L'USO: Applicare sull'area da trattare stendendo una quantità sufficiente di crema, in modo che lo spessore medio depositato sulla pelle non sia inferiore a 1 mm. Aggiungere altra crema durante il trattamento quando si nota che non ha più la morbidezza iniziale e la sua densità aumenta, rendendo difficili i movimenti della mano. Eliminare la crema in eccesso dopo il trattamento.

AVVERTENZA: Solo le creme Proionic sono state studiate e collaudate per l'uso con l'apparecchiatura INDIBA Proionic Systems.

L'uso di gel o creme di altro tipo rende nulla la garanzia dell'apparecchiatura, e il loro utilizzo può causare danni alla persona in trattamento.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Aplicar sobre a área a cuidar espalhando uma quantidade suficiente de creme de forma a que a espessura média depositada sobre a pele não seja inferior a 1 mm. Adicionar mais creme durante o cuidado quando se considerar que já não existe a liberdade inicial e que a densidade está a aumentar dificultando o movimento manual. Retirar o excesso de creme depois do cuidado.

ADVERTÊNCIA: Apenas as cremes Proionic foram concebidas e verificadas para utilização em conjunto com os equipamentos INDIBA Proionic Systems.

A utilização de outros géis ou cremes invalida a garantia do equipamento, e sua utilização pode causar danos a pessoa em cuidado. Não utilizar em crianças.

DE ANWENDUNGSHINWEISE: Wenden Sie die Creme in ausreichender Menge auf die zu behandelnde Körperstelle an, sodass die durchschnittliche Dichte auf der Haut nicht weniger als 1 mm beträgt. Tragen Sie während der Behandlung mehr Creme auf, wenn Sie bemerken, dass die Creme nicht mehr so gleichmäßig wie zu Beginn ist und die Dichte zunimmt, wodurch die Handbewegungen erschwert werden. Überschüssige Creme nach der Behandlung entfernen.

HINWEIS: Nur die Cremes der Reihe Proionic wurden zur Verwendung mit den Geräten der Reihe INDIBA Proionic Systems entwickelt und getestet. Die Verwendung anderer Gele oder Cremes wird die Garantie für Ihr Gerät erlöschen, und diese Verwendung kann der behandelten Person Schaden zufügen.

GB INSTRUCTIONS FOR USE: Apply to the area to be treated by spreading a sufficient amount of cream so that the average thickness deposited on the skin is not less than 1 mm. Add more cream during the treatment when it is noticed that it no longer has its initial smoothness and its density increases, making hand movements difficult. Remove the remaining cream after treatment.

WARNING: Only Proionic creams have been designed and tested for use with INDIBA Proionic Systems.

Use of other gels or creams invalidates the warranty of the equipment and may cause harm to the person under treatment.

SP INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar sobre el área a tratar esparciendo la suficiente cantidad de crema de forma que el grosor medio que se deposita sobre la piel no sea inferior a 1 mm. Añadir más crema durante el tratamiento cuando se advierte que ésta ya no tiene la suavidad inicial y su densidad aumenta dificultando el movimiento manual. Retirar el exceso de crema tras el tratamiento.

ADVERTENCIA: Sólo las Cremas Proionic han sido diseñadas y verificadas para su uso con los equipos INDIBA Proionic Systems.

El uso de otros geles o cremas invalida la garantía del equipo, y su uso puede causar daño a la persona bajo tratamiento.

FR MODE D'EMPLOI : Appliquer en étalant sur la zone à traiter une quantité suffisante de crème pour obtenir une épaisseur moyenne de produit sur la peau d'au moins 1 mm. Ajouter de la crème au cours du traitement si elle s'épaissit et gêne l'intervention manuelle. Retirer l'excès de crème après le traitement.

AVERTISSEMENT : Seules les crèmes Proionic ont été élaborées et contrôlées pour être utilisées avec le matériel INDIBA Proionic Systems.

L'utilisation d'autres gels ou crèmes annule la garantie du matériel, et peut nuire à la santé de la personne traitée.

NL GEBRUIKSMETHODEN: Breng de crème aan op het te behandelen oppervlak door een voldoende hoeveelheid crème uit te smeren, zodat de gemiddelde dikte van de laag die is aangebracht op de huid niet minder dan 1 mm bedraagt. Voeg tijdens de behandeling meer crème toe als blijkt dat deze niet langer glad en soepel is en de dichtheid ervan toeneemt, waardoor handbewegingen moeilijk worden. Verwijder overtollige crème na behandeling.

WAARSCHUWING: Alleen Proionic crèmes zijn ontworpen en getest voor gebruik met INDIBA Proionic Systems apparatuur.

Het gebruik van andere gels of crèmes wordt maakt de garantie van de apparatuur ongeldig, en hun gebruik tot letsel bij de behandelde persoon kan leiden.

JP 使用方法 治療部位に適量を塗布してご使用下さい。同じ電極にも塗布のクリームを塗布してください。塗布クリームが少なくなってきた場合は追加して塗布を続けてください。塗布に過剰なクリームを塗布してはなりません。

成分: 水、PEG-6 ステアレート、PG 液体パラフィン、PEG-40 液体パラフィン、トリ(カプリル/カプリン)グリセリル、スチレン/アクリルコポリマー、PEG-32 ステアレート、塩化ナトリウム、PEG-75 ラノリン、コレステロール、コレステロールスクワート、コレステロールスクワート、コレステロールスクワート、TEA、パラフィン、グリセリン、ソルビン酸。

注意: 本製品は INDIBA Proionic Systems 専用で使用されるキャパシティブ レンズタイプ用の導電クリームです。皮膚に合わないときは使用を中止して下さい。

その他のジェルまたはクリームを使用した場合、保証を受けることができません。また、皮膚の損傷やその他の副作用を引き起こす可能性があります。お気をつけください。

輸入販売元: 株式会社インテック・システムズ (株) 東京都品川区 1-15-15 TEL: 03-5758-0871

KR 사용 안내: 충분한 양의 크림을 치료 부위에 펴 바르거나 피부 위에 도포된 크림의 평균 두께가 1mm 이하가 되도록 합니다. 사용 중 부드러움이 사라지고 딱딱해지면 손의 움직임이 어려워 되면 크림을 계속 덧바릅니다. 바른 후 남은 크림은 닦아내십시오.

참고: Proionic 크림 제품은 INDIBA Proionic Body Care Systems 에 사용하도록 테스트를 거쳤습니다. 다른 물질이나 크림을 사용하는 경우 장비에 대한 보증 사항의 법적 효력을 상실하게 되어 치료 중인 사람에게 해를 끼칠 수 있습니다.

Рис. 51 Оригинальная маркировка крема электропроводящего Anticellulite Cream

МАРКІРОВКА И УПАКОВКА

73

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE

Аппарат радиочастотный гипертермический

Элемент изделия:

крем электропроводящий Anticellulite Cream

Электропроводящий крем для проведения процедур в емкостном и резистивном режимах.

Для профессионального использования. 1000 мл

Инструкция: нанесите на участок тела, на котором будет проводиться процедура, достаточное количество крема электропроводящего, таким образом, чтобы толщина нанесенного слоя была не менее 1 мм. Во время процедуры добавляйте еще некоторое количество крема электропроводящего, если не наблюдается первоначальной гладкости и его плотность возросла, создавая трудности для манипуляций. После проведения процедуры удалите оставшийся электропроводящий крем.

Предупреждение: крема электропроводящие производства компании Индиба С.А. созданы и протестированы для использования совместно с Аппаратом радиочастотным гипертермическим.

Использование кремов электропроводящих сторонних производителей нарушает гарантию на изделие и может нанести вред пациенту.

Состав: Вода, ПЭГ-6 стеарат, пропиленгликоль, минеральное масло, гидрогенизированное пальмовое/пальмоядровое масло ПЭГ-6 эстерс, каприлик/каприловый триглицерид, глицерил стеарат, полиэтиленгликоль-32 стеарат, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-75 ланолин, фукуса пузырчатый экстракт, дипропиленгликоль, экстракт гуггула, форсколин, экстракт каштана конского, отдушка, бензиловый спирт, триэтаноламин, салициловая кислота, глицерин, сорбиновая кислота



Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания

C/Moianès, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Spain

Информация о уполномоченном представителе производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от

Рис. 52 Дополнительная маркировка крема электропроводящего Anticellulite Cream для русскоязычного пользователя



Aqua
PEG-6 Stearate
Paraffinum liquidum
Hydrogenated Palm/palm kernel oil PEG-6 esters
Caprylic/capric Triglyceride
Glycol Stearate
PEG-32 Stearate
Sodium Sulphate
PEG-75 Lanolin
Benzyl Alcohol
Triethanolamine
Sabicylic Acid
Glycerin
Sorbic Acid

Use of other gels or creams invalidates the warranty of the equipment and may cause harm to the person under treatment.

El uso de otros geles o cremas invalida la garantía del equipo, y su uso puede causar daño a la persona bajo tratamiento.

L'utilisation d'autres gels ou crèmes annule la garantie du matériel et peut nuire à la santé de la personne traitée.

DOY FR

Аппарат радиочастотный гипертермический

Элемент изделия:

крем электропроводящий Face Cream

Электропроводящий крем для проведения процедур в емкостном и резистивном режимах

Для профессионального использования. 1000 мл

Инструкция: нанесите на участок тела, на котором будет проводиться процедура, достаточное количество крема электропроводящего, таким образом, чтобы толщина нанесенного слоя была не менее 1 мм. Во время процедуры добавьте еще некоторое количество крема электропроводящего, если не наблюдается первоначальной гладкости и его плотность возросла, создавая трудности для манипуляций. После проведения процедуры удалите оставшийся электропроводящий крем.

Предупреждение: крема электропроводящие производства компании Индиба С.А. созданы и протестированы для использования совместно с Аппаратом радиочастотным гипертермическим.

Использование кремов электропроводящих сторонних производителей нарушает гарантию на изделие и может нанести вред пациенту.

Состав: Вода, ПЭГ-6 стеарат, пропиленгликоль, минеральное масло, гидрогенизированное пальмовое/пальмоядровое масло ПЭГ-6 эстеров, каприлик/каприловый триглицерид, глицерил стеарат, полиэтиленгликоль-32 стеарат, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-75 ланолин, бензиловый спирт, триэтаноламин, салициловая кислота, глицерин, сорбиновая кислота



Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания

C/Moianés, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Spain

Информация о уполномоченном представителе производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от


Рис. 54 Дополнительная маркировка крема электропроводящего Face Cream для русскоязычного пользователя

INDIBA
PROIONIC CREAMS

INDIBA
PROIONIC CREAMS



CONDUCTIVE CREAM FOR
CAPACITIVE & RESISTIVE TREATMENT

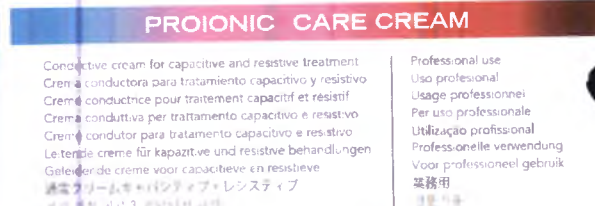

1000 ml. e 35 fl oz

INGREDIENTS
INGREDIENTES
COMPOSITION
INGREDIEN
INGREDIENTES
INHALTSSTOFFE
INGREDIËNTEN

成分
원료

Aqua
PEG-6 Stearate
Paraffinum liquidum
Hydrogenated Palm/palm kernel oil PEG-6 esters
Caprylic/capric Triglyceride
Glycol Stearate
PEG-32 Stearate
Sodium Sulphate
PEG-75 Lanolin
Parfum
Benzyl Alcohol
Tnehanolamine
Salicylic Acid
Glycerin
Sorbic Acid

Copyright© 2015 Indiba S.A. All rights reserved. Made in Spain

GB INSTRUCTIONS FOR USE: Apply to the area to be treated by spreading a sufficient amount of cream so that the average thickness deposited on the skin is not less than 1 mm. Add more cream during the treatment when it is noticed that it no longer has its initial smoothness and its density increases, making hand movements difficult. Remove the remaining cream after treatment.

WARNING: Only Proionic creams have been designed and tested for use with INDIBA Proionic Systems.

Use of other gels or creams invalidates the warranty of the equipment and may cause harm to the patient.

SP INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar sobre el área a tratar esparciendo la suficiente cantidad de crema de forma que el grosor medio que se deposite sobre la piel no sea inferior a 1 mm. Añadir más crema durante el tratamiento cuando se advierte que esta ya no tiene la soltura inicial y su densidad aumenta dificultando el movimiento manual. Retirar el exceso de crema tras el tratamiento.

ADVERTENCIA: Solo las Cremas Proionic han sido diseñadas y verificadas para su uso con los equipos INDIBA Proionic Systems.

El uso de otros geles o cremas invalida la garantía del equipo, y su uso puede causar daño al paciente.

FR MODE D'EMPLOI : Appliquer en étalant sur la zone à traiter une quantité suffisante de crème pour obtenir une épaisseur moyenne de produit sur la peau d'au moins 1 mm. Ajouter de la crème au cours du traitement si elle s'épaissit et gêne l'intervention manuelle. Retirer l'excès de crème après le traitement.

AVERTISSEMENT : Seules les cremes Proionic ont été élaborées et contrôlées pour être utilisées avec le matériel INDIBA Proionic Systems.

L'utilisation d'autres gels ou crèmes annule la garantie du matériel, et peut nuire à la santé de la patient.

IT ISTRUZIONI PER L'USO: Applicare sull'area da trattare stendendo una quantità sufficiente di crema, in modo che lo spessore medio depositato sulla pelle non sia inferiore a 1 mm. Aggiungere altra crema durante il trattamento quando si nota che non ha più la morbidezza iniziale e la sua densità aumenta, rendendo difficili i movimenti della mano. Eliminare la crema in eccesso dopo il trattamento.

AVVERTENZA: Solo le creme Proionic sono state studiate e collaudate per l'uso con l'apparecchiatura INDIBA Proionic Systems.

L'uso di gel o creme di altro tipo rende nulla la garanzia dell'apparecchiatura, e il loro utilizzo può causare danni al paziente.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Aplicar sobre a área a tratar espalhando uma quantidade suficiente de creme de forma a que a espessura média depositada sobre a pele não seja inferior a 1 mm. Adicionar mais creme durante o tratamento quando se considerar que não existe a liberdade inicial e que a densidade está a aumentar dificultando o movimento manual. Retirar o excesso de creme depois do tratamento.

ADVERTÊNCIA: Apenas os cremes Proionic foram concebidos e verificados para utilização em conjunto com os equipamentos INDIBA Proionic Systems.

A utilização de outros geles ou cremes invalida a garantia do equipamento, e sua utilização pode causar danos ao paciente.

DE ANWENDUNGSHINWEISE: Wenden Sie die Creme in ausreichender Menge auf die zu behandelnde Körperstelle an, sodass die durchschnittliche Dicke auf der Haut nicht weniger als 1 mm beträgt. Tragen Sie während der Behandlung mehr Creme auf, wenn Sie bemerken, dass die Creme nicht mehr so gleitfähig wie zu Beginn ist und die Dichte zunimmt, wodurch die Handbewegungen erschwert werden. Überschüssige Creme nach der Behandlung entfernen.

HINWEIS: Nur die Cremes der Reihe Proionic wurden zur Verwendung mit den Geräten der Reihe INDIBA Proionic Systems entwickelt und getestet. Die Verwendung anderer Gels oder Cremes wird die Garantie für Ihr Gerät erlöschen, und diese Verwendung kann dem Patient Schaden zufügen.

NL GEBRUIKSIJNSTRUCTIES: Breng de crème aan op het te behandelen oppervlak door een voldoende hoeveelheid crème uit te smeren, zodat de gemiddelde dikte van de laag die is aangebracht op de huid niet minder dan 1 mm bedraagt. Voeg tijdens de behandeling meer creme toe als blijkt dat deze niet langer glad en soepel is en de dichtheid ervan toeneemt, waardoor handbewegingen moeilijk worden. Verwijder overtollige creme na behandeling.

WAARSCHUWING: Alleen Proionic -crèmes zijn ontworpen en getest voor gebruik met INDIBA Proionic Systems -apparatuur.

Het gebruik van andere gels of cremes wordt maakt de garantie van de apparatuur ongekldig, en hun gebruik tot letsel bij de patiënt kan leiden.

JP 使用方法: 患部部位に適量を塗布してご使用下さい。塗り残しに少量のクリームを塗り足してください。適量クリームがなくなってきた場合は追加して量を続けてください。塗布後に過剰なクリームを除去してください。

成分表: ステアリン酸PEG-6、流動パラフィン、PEG-8(水添パーム油)水添パーム油、トリ(カプリル酸)グリセリル、ステアリン酸グリコール、ステアリン酸PEG-32、硫酸Na、PEG-75(ラノリン)、香料、ベンジルアルコール、TEA、サリチル酸、グリセリン、ソルビン酸。

注意: 当製品は INDIBA Proionic Systems 機器に使用するキャパシティブ・レシステブ用の適量クリームです。皮膚に合わないときはご使用を止め下さい。

その他のジェルまたはクリームを使用した場合、患部に害を与える可能性があるので、お控えください。

輸入販売先: 株式会社インディバ・ジャパン 内容量: 1000ml
東京都目黒区文谷5-15-1 1F
TEL: 03-5768-8871

KR 사용 안내: 증편한 양의 크림을 치료 발을 부위에 퍼 갈라서 피부 위에 도포된 크림의 평균 두께가 1mm 이하가 되도록 하십시오.
처음의 메끄러움이 사라지고 딱딱해져서 손의 움직임이 어렵게 되면 치료 중에 크림을 덧바르십시오. 바른 후 남은 크림은 닦아내십시오.
경고: Proionic 크림 제품만 INDIBA Proionic Systems 기기에 사용하도록 테스트를 하였습니다. 다른 젤이나 크림을 사용하는 경우 장비에 대한 보증 사항의 법적 효력을 상실하게 되며 치료 중인 환자에게 해를 미칠 수도 있습니다.

Рис. 55 Оригинальная маркировка крема электропроводящего Care Cream

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

77

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Аппарат радиочастотный гипертермический

Элемент изделия:

Крем электропроводящий Care Cream

Электропроводящий крем для проведения процедур в емкостном и резистивном режимах.
Для профессионального использования. 1000 мл

Инструкция: нанесите на участок тела, на котором будет проводиться процедура, достаточное количество крема электропроводящего, таким образом, чтобы толщина нанесенного слоя была не менее 1 мм. Во время процедуры добавляйте еще некоторое количество крема электропроводящего, если не наблюдается первоначальной гладкости и его плотность возросла, создавая трудности для манипуляций. После проведения процедуры удалите оставшийся электропроводящий крем.

Предупреждение: крема электропроводящие производства компании Индиба С.А. созданы и протестированы для использования совместно с Аппаратом радиочастотным гипертермическим.

Использование кремов электропроводящих сторонних производителей нарушает гарантию на изделие и может нанести вред пациенту.

Состав: Вода, ПЭГ-6 стеарат, пропиленгликоль, минеральное масло, гидрогенизированное пальмовое/пальмоядровое масло ПЭГ-6 эстерс, каприлик/каприловый триглицерид, глицерил стеарат, полиэтиленгликоль-32 стеарат, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-75 ланолин, бензиловый спирт, отдушка, триэтаноламин, салициловая кислота, глицерин, сорбиновая кислота



Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания

C/Moianés, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Spain

Информация о уполномоченном представителе производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 781-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от

Рис. 56 Дополнительная маркировка крема электропроводящего Care Cream для русскоязычного пользователя

Упаковка

Блок основной поставляется в картонной коробке размером 590мм*610мм*380мм, ± 10 мм. При ее открытии пользователь увидит поясняющую маркировку с информацией о правильном извлечении аппарата из транспортной тары. Также наверх положен лист вспененного полиэтилена в качестве дополнительной защиты.



Рис. 57 Транспортная упаковка блока основного

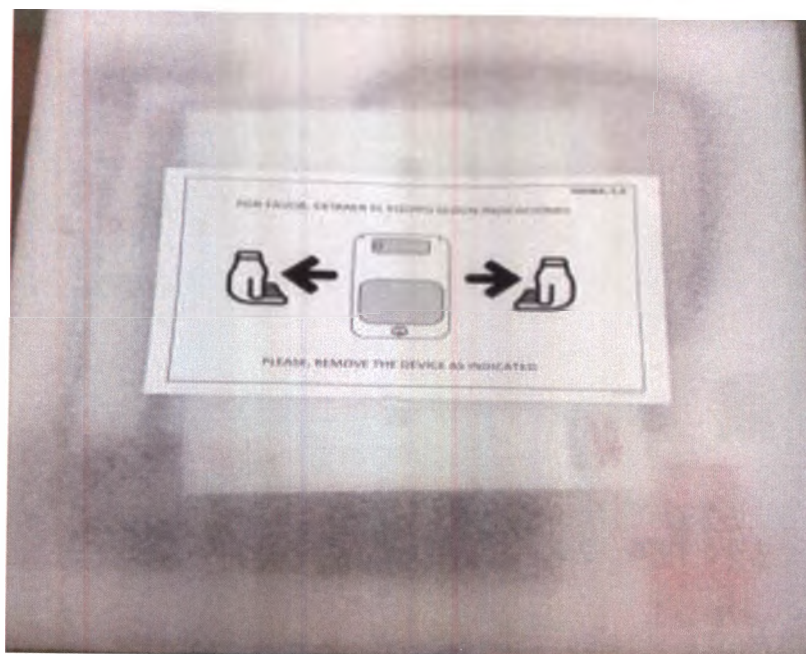


Рис. 58 Поясняющая маркировка о правильном извлечении аппарата из упаковки

При снятии защитного листа из вспененного полиэтилена пользователь увидит элементы состава изделия, каждый из которых находится в своей ячейке формы из вспененного полиэтилена.



Рис. 59 Элементы изделия (активные электроды (RES и CAP) находятся под возвратным плоским электродом)

После извлечения формы с элементами изделия пользователь обнаружит блок основной в нетканом мешке, на который надеты средства защиты от ударов из вспененного полиэтилена.

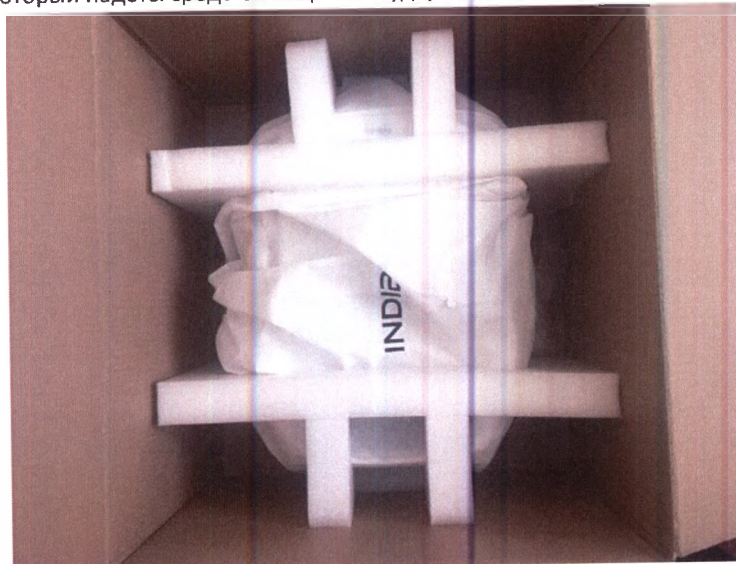


Рис. 60 Упаковка блока основного



Рис. 61 Маркировка транспортной упаковки аппарата на примере варианта исполнения Аппарат радиочастотный гипертермический ELITE NS (для другого варианта исполнения – аналогично). На маркировке указано, что изделие хрупкое (FRAGILE), а также, что произведено в Испании (made in Spain).

Стойка-тележка поставляется в картонной коробке размером 600мм*400мм*900мм, ±10мм, стянутой упаковочной лентой.



Рис. 62 Транспортная упаковка стойки-тележки

При открытии транспортной упаковки пользователь обнаружит стойку-тележку в полиэтиленовом чехле, на края которого надет вспененный полиэтилен для защиты от ударов. Стойка-тележка стоит на деревянном каркасе.

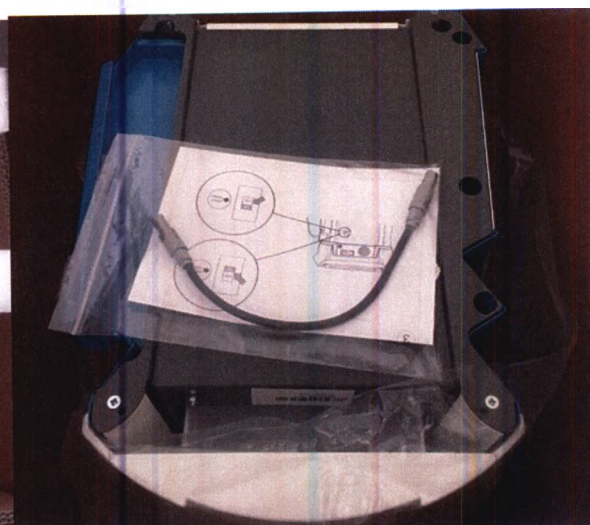
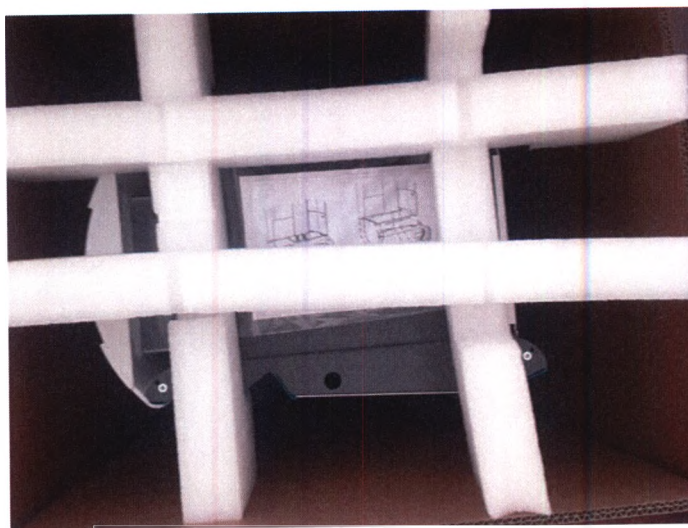


Рис. 63 Стойка-тележка с защитой из вспененного полиэтилена, вместе со стойкой-тележкой поставляется графический материал по включению и установке аппарата, кабель соединительный и ключи для ящиков стойки-тележки.

Крем электропроводящий поставляется запечатанным в полиэтиленовую пленку и защитным колпачком на носике:

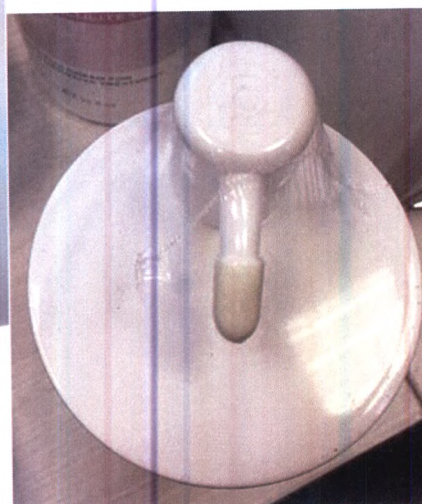


Рис. 64 Крем электропроводящий Face Cream, запечатанный в полиэтиленовую пленку

Крема электропроводящие могут поставляться в отдельной транспортной упаковке размером 420мм*330мм*250мм ±10мм либо в транспортной упаковке комплекта Welcome Pack:

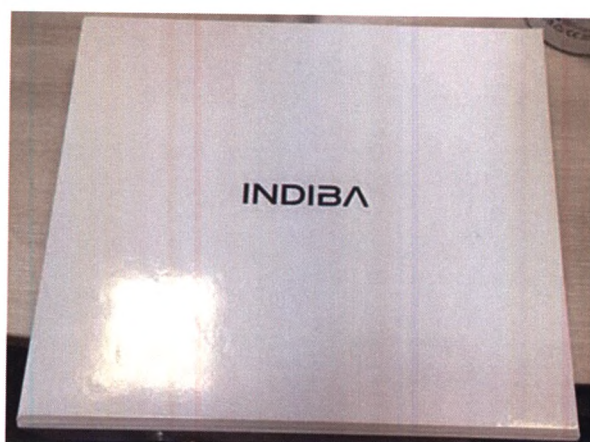


Рис. 65 Транспортная упаковка крема электропроводящего

Комплект Welcome Pack поставляется в отдельной картонной коробке размером 331мм*365мм*280мм ±10мм. Внутрь вложены наполненные воздухом полиэтиленовые пакеты для защиты от ударов и повреждений. В данной коробке находятся крема электропроводящие (если отсутствует транспортная упаковка крема электропроводящего), сумка для электродов, а также отдельная коробка на магнитных замках размером 258мм*60мм*295мм ±10мм, в которой размещены насадки массажные и USB-накопитель.



Рис. 66 Транспортная упаковка комплекта Welcome Pack



МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

83

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY FE

[Handwritten signature]



Рис. 67 Упаковка насадок массажных и USB-накопителя в отдельную коробку. Внутрь также вложен графический материал с инструкцией по установке насадки массажной

Комплект PACK GINECO-AESTHETICS поставляется в отдельной коробке на магнитных замках (аналогичная описана выше коробке с комплектом Welcome Pack). Данная коробка помещается в транспортную картонную упаковку размером 163мм*423мм*325мм ±10мм.

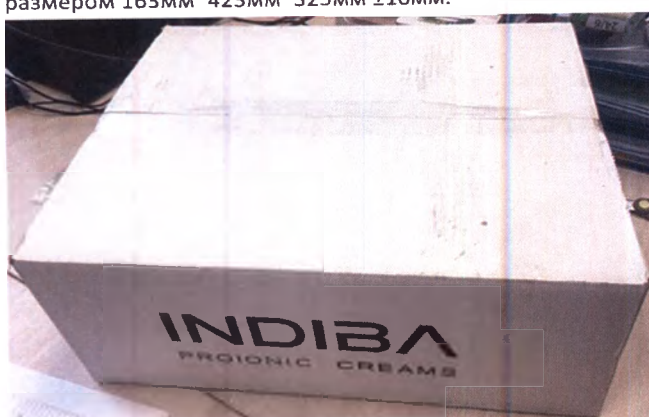


Рис. 68 Транспортная упаковка комплекта PACK GINECO-AESTHETICS (слева) и потребительская упаковка комплекта PACK GINECO-AESTHETICS (справа)

На транспортных тарax имеются следующие обозначения условий транспортирования и хранения:



Верх

Хрупкое, обращаться осторожно

Беречь от влаги

Маркировка транспортных тар изделий содержит:

- Наименование изделия;
- Модель (вариант исполнения);

и следующие символы:



Символ «Серийный номер» с указанием серийного номера;



Символ «Дата изготовления» с указанием даты изготовления;



Символ «Информация о производителе» (с указанием наименования производителя и адреса).

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020, DOY FE.

Технические данные

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие классифицируется в соответствии с международными стандартами и относится к медицинскому электрооборудованию со следующими характеристиками:

- Класс электробезопасности изделия: **I класс электробезопасности**
Электромагнитная совместимость: группа I, класс Б
- Тип защиты рабочей части от токов утечки: **рабочая часть типа BF**
- Степень защиты оболочки: **IPX0**
- Метод стерилизации: **не применимо**
- Защита от опасностей возгорания воспламеняющихся смесей анестетиков с воздухом или с кислородом, или закисью азота: **нет**
- Режим работы: **продолжительный**
- Расчетный срок эксплуатации: **5 лет**
- Встроенное программное обеспечение: **V1.09 от 02.05.2018**
- Класс риска встроенного программного обеспечения: **A**
- Программа мониторинга: **0.5R0 от 19.04.2016**
- Класс риска встроенного программного обеспечения: **A**

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ГОСТ ISO 13485-2016 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования
- ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
- ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность
- ГОСТ Р МЭК 62304-2013 Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению
- ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения
- ГОСТ Р 51188-98 Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование»

- ГОСТ 31214-2016 Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность
- ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
- ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы invitro
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
- ГОСТ 31209-2003 Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний
- МУК 4.1.742-99 Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде
- ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа (с Изменениями N 1, 2)
- МУК 4.1.3166-14 Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксиолов, изопропилбензола, стирола, α -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава
- МР 1849-78 Методические рекомендации по определению формальдегида в водных вытяжках и модельных средах
- И-880-71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» (этиленгликоль)
- ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
- ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии (с Поправками)
- ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами
- МУК 4.1.3169-14 Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава
- МР 1503-76 Методические рекомендации по определению гексаметилен-диамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности
- МУК 4.1.647-96 Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Условия эксплуатации:

- Температура воздуха: +10°C до +40°C.
(для электрода RES продольного и электрода САР продольного температура воздуха от +32 °C до +42 °C)
- Относительная влажность воздуха: 30% - 75%.
- Атмосферное давление: 70 кПа - 106 кПа.

Условия транспортирования и хранения:

- Температура воздуха: -20 °C - +50 °C.
- Относительная влажность воздуха: 10% - 100%, без конденсации.
- Атмосферное давление: 50 кПа — 106 кПа.

Перед включением аппарата, дождитесь пока его температура не станет равной комнатной температуре.

Ha causado el asiento nº 97 de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DOY FE.


87

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент изделия	Параметр	Значение
Блок основной ELITE NS	Масса, кг, $\pm 1\%$	8.6
	Размер, мм, $\pm 1\%$	400x530x150
Блок основной RGN	Масса, кг, $\pm 1\%$	8.4
	Размер, мм, $\pm 1\%$	400x530x150
Стойка-тележка	Масса, кг, $\pm 1\%$	37,72
	Размер, мм, $\pm 1\%$	445x325x905 При открытых ящиках ширина увеличивается до 740 мм
Кабель соединительный	Масса, кг, $\pm 10\%$	0,025
	Длина провода, мм, $\pm 5\%$	315
	Диаметр разъема, мм, $\pm 5\%$	19
Кабель питания экранированный	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,223
	Длина провода, мм, $\pm 1\%$	3000
	Диаметр провода, мм, $\pm 5\%$	5.5
Ключ	Масса, кг, $\pm 0,001$ кг	0,007
	Размер, мм, ± 1 мм	40x23x2
Рукоятка изогнутая для электрода RES	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,253
	Размер, мм, $\pm 1\%$	235 (длина) x70 (ширина)
	Длина провода, мм, $\pm 1\%$	2000
	Диаметр провода, мм, $\pm 5\%$	5.5
Рукоятка изогнутая для электрода CAP	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,253
	Размер, мм, $\pm 1\%$	235 (длина) x 70 (ширина)
	Длина провода, мм, $\pm 1\%$	2000
	Диаметр провода, мм, $\pm 5\%$	5.5
Рукоятка прямая для электрода CAP	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,226
	Размер, мм, $\pm 1\%$	210 (длина) x 20 (ширина)
	Длина провода, мм, $\pm 1\%$	2000
	Диаметр провода, мм, $\pm 5\%$	5.5
Пульт управления	Масса, кг, $\pm 0,003$ кг	0,036
	Размер, мм, ± 1 мм	89x44x12
Батарейка для пульта управления	Масса, кг, $\pm 10\%$	0,003
	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	20
Электрод возвратный цилиндрический	Масса, кг, $\pm 0,005$ кг	0,078
	Размер, мм, $\pm 1\%$	121 (длина) x 26 (диаметр)
	Длина провода, мм, $\pm 1\%$	2000
	Диаметр провода, мм, $\pm 5\%$	5.5
	Масса кабеля электрода возвратного цилиндрического, $\pm 0,005$ кг	0,078
Сумка для электродов	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,186
	Размеры, мм, $\pm 1\%$	305x75x75
Электрод возвратный плоский	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,3
	Размеры, мм, $\pm 1\%$	221,8 (ширина) x 296 (высота)
	Длина провода, мм, $\pm 1\%$	2000
	Диаметр провода, мм, $\pm 5\%$	5.5
Электрод RES диаметром 35 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	35
	Диаметр вала, подключаемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	6
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,045
Электрод RES диаметром 50 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	50
	Диаметр вала, подключаемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	6
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,074

Электрод RES диаметром 65 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	65
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	6
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,114
Электрод RES диаметром 90 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	90
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	6
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,209
Электрод CAP диаметром 30 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	30
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	3,5
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,032
Электрод CAP диаметром 40 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	40
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	3,5
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,047
Электрод CAP диаметром 55 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	55
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	3,5
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,051
Электрод CAP диаметром 65 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	65
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	3,5
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,065
Электрод CAP диаметром 80 мм	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	80
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	3,5
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,085
Электрод RES продольный	Размер, мм, $\pm 1\%$	100 (длина) x 14 мм (диаметр)
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	6
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,119
Электрод CAP продольный	Размер, мм, $\pm 1\%$	100 (длина) x 14 мм (диаметр)
	Диаметр вала, подсоединяемого к рукоятке, мм, $\pm 10\%$	3,5
	Масса, кг, $\pm 1\%$	0,046
Насадка массажная	Диаметр, мм, $\pm 1\%$	65
	Масса, кг, $\pm 0,003$ кг	0,025
USB-накопитель	Размер, мм, ± 1 мм	56x7x19
	Масса, кг, $\pm 10\%$	0,011
Крем электропроводящий Anticellulite Cream	Размер, мм, ± 1 мм	163 (высота) x 97 (диаметр)
	Объем, мл, ± 5 мл	1000
Крем электропроводящий Face Cream	Размер, мм, ± 1 мм	163 (высота) x 97 (диаметр)
	Объем, мл, ± 5 мл	1000
Крем электропроводящий Care Cream	Размер, мм, ± 1 мм	163 (высота) x 97 (диаметр)
	Объем, мл, ± 5 мл	1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

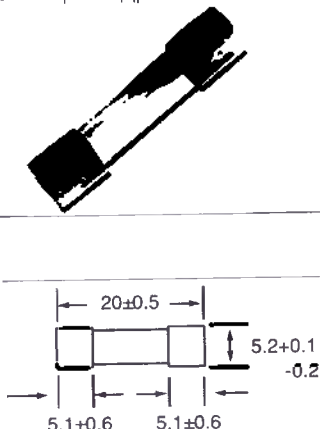№	Технические характеристики		Значение
ELITE NS, RGN			
1.	Входное напряжение, В		100-240 В
2.	Номинальная частота		50/60 Гц
3.	Входной предохранитель		2*4А, с задержкой срабатывания (Т 4А L 250 В, в соответствии с ГОСТ IEC 60127-2-2013)
4.	Потребляемая мощность:		В режиме ожидания: 22 Вт ELITE NS - 360 ВА (при 100 В), 352 ВА (при 240 В) RGN – 150 ВА (при 100 В), 145 ВА (при 240 В) При входном напряжении 220-240В: ELITE NS -352 ВА RGN – 145 ВА
5.	Защита аппарата от:		Случайные замыкания между активным и возвратным электродами Перегревание
6.	Дисплей		8 дюймов, 800х480 пикселей с 10.1" сенсорным экраном, 600 кд/м ²
7.	Батарейка для пульта управления		3 В, 220 мА*ч
8.	Кабель соединительный		3 контакта в разъеме
9.	Кабель питания экранированный		Тип входного разъема - Разъем штыревой CEE7/7 (Schuko) Тип выходного разъема - Разъем IEC 60320 C13
10.	USB-накопитель		8 Гб. USB 2.0
11.	Наибольшее усилие, необходимое для включения тормозов на колесиках, Н		150
12.	Усилие, необходимое для перемещения стойки-тележки с установленным блоком основным не должно превышать, Н		100
13.	Рукоятка изогнутая/прямая для электрода CAP	Количество контактов в разъеме	5
		Тип разъема	Цилиндрический
		Диаметр разъема, мм, ±1 мм	19
14.	Рукоятка прямая для электрода RES	Количество контактов в разъеме	4
		Тип разъема	Цилиндрический
		Диаметр разъема, мм, ±1 мм	19
15.	Электрод возвратный цилиндрический	Количество контактов в разъеме	3
		Тип разъема	Цилиндрический
		Диаметр разъема, мм, ±1 мм	19
16.	Предохранитель	Тип	Керамический цилиндрический плавкий
		Количество предохранителей, шт.	2
		Размеры предохранителя, мм	

		Номинальное напряжение предохранителя, В	250
		Номинальный ток предохранителя, А	4
		Номинальное время срабатывания предохранителя, с	Смотрите рисунок ниже
		Замена предохранителей в случае их перегорания может осуществляться пользователем: отключите аппарат от сети питания, извлеките перегоревший предохранитель из отсека для предохранителей, а затем вставьте новый, закройте крышку отсека для предохранителей.	

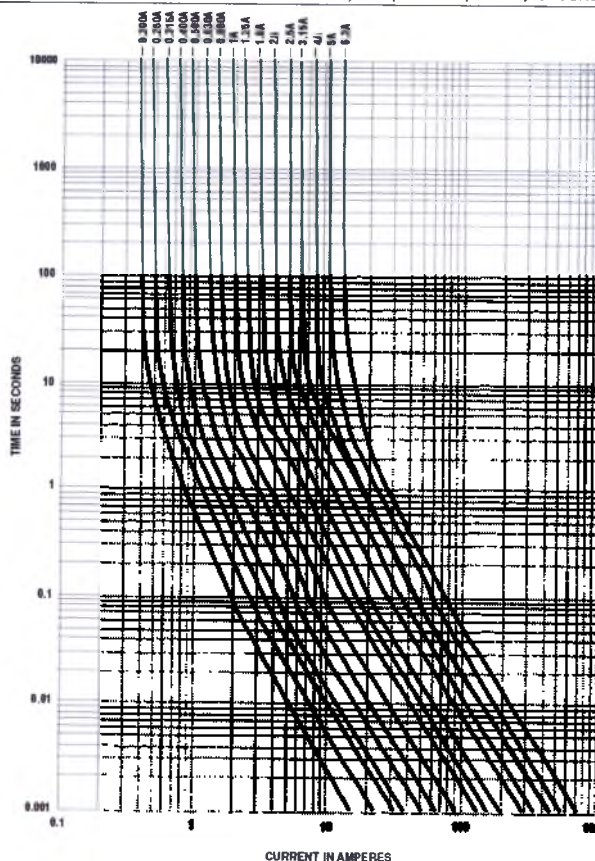


Рис. 69 Кривая времени срабатывания предохранителя в секундах (по вертикали) в зависимости от величины тока в амперах (по горизонтали).

ELITE NS			
		Резистивный (RES) режим	Емкостный (CAP) режим
Форма выходного сигнала:		Синусоидальная, с модуляцией и без нее	
Вид модуляции		Амплитудная	
Общее гармоническое искажение (THD):		<2,5%	
Выходная частота:		448 кГц	
Максимальное выходное напряжение:		120 В ~ (среднеквадр.)	620 В ~ (среднеквадр.)
Максимальная выходная мощность:		200 ВА	450 ВА
Максимальная фиксируемая выходная мощность:		200 Вт	150 Вт
Допустимая погрешность выходной частоты:		± 1 кГц	
Допустимая погрешность выходной мощности:		$\pm 10\%$ - ± 2 Вт, либо большее из двух значений	

		RGN	
		Резистивный (RES) режим	Емкостный (CAP) режим
Форма выходного сигнала:		Синусоидальная, с модуляцией или без нее	
Вид модуляции		Амплитудная	
Общее гармоническое искажение (THD):		<2,5%	
Выходная частота:		448 кГц	
Максимальное выходное напряжение:		90 В ~ (среднеквадр.)	620 В ~ (среднеквадр.)
Максимальная выходная мощность:		65 ВА	250 ВА
Максимальная фиксируемая выходная мощность:		65 Вт	50 Вт
Допустимая погрешность выходной частоты:		± 1 кГц	
Допустимая погрешность выходной мощности:		$\pm 10\% - \pm 2$ Вт, либо большее из двух значений	

Аппарат подключается и отключается от сети питания с помощью выключателя питания на задней панели. Когда выключатель находится в положении «0» (Выкл), электропитание на аппарат не поступает.

При проверке или замене предохранителей отсоедините кабель питания экранированный от аппарата и переведите выключатель в положение «0» (положение «Выкл»). Заменяемые предохранители должны иметь указанные выше характеристики. Эту информацию также можно найти на маркировке, расположенной рядом с отсеком предохранителей.

Процентное содержание электропроводящих кремов

Крем электропроводящий Anticellulite Cream

Компонент	% содержание
Вода	65,090
ПЭГ-6 стеарат	9,000
Вазелиновое масло	5,000
Гидрогенизированное пальмовое/ пальмоядровое масло сложный эфир ПЭГ-6	5,000
Каприлик/Каприловый триглицерид	3,000
Стеарат гликоля	3,000
Стеарат ПЭГ-32	3,000
Пропиленгликоль	2,800
Сульфат натрия	1,200
Бензиловый спирт	0,800
Ланолин ПЭГ-75	0,500
Дипропиленгликоль	0,400
Парфюмерная отдушка	0,300
Мирт арабский экстракт	0,200
Экстракт корня колеуса форсколии	0,200
Экстракт конского каштана	0,150
Триэтаноламин	0,149
Салициловая кислота	0,100
Глицерин	0,070
Сорбиновая кислота	0,030
Фукуса пузырчатый экстракт	0,015

Крем электропроводящий Face Cream

Компонент	% содержание
Вода	74,12180
ПЭГ-6 стеарат	7,68000
Вазелиновое масло	5,00000
Каприлик/Каприловый триглицерид	3,00000
Гидрогенизированное пальмовое/ пальмоядровое масло сложный эфир ПЭГ-6	3,00000
Стеарат гликоля	2,16000
Стеарат ПЭГ-32	2,16000
Сульфат натрия	1,20000
Глицерин	0,04000
Салициловая кислота	0,12000
Ланолин ПЭГ-75	0,50000
Триэтаноламин	0,17820
Сорбиновая кислота	0,04000
Бензиловый спирт	0,80000

Крем электропроводящий Care Cream

Компонент	% содержание
Вода	68,980
ПЭГ-6 стеарат	9,000
Вазелиновое масло	5,000
Гидрогенизированное пальмовое/ пальмоядровое масло сложный эфир ПЭГ-6	5,000
Каприлик/Каприловый триглицерид	3,000
Стеарат гликоля	3,000
Стеарат ПЭГ-32	3,000
Сульфат натрия	1,200
Ланолин ПЭГ-75	0,500
Бензиловый спирт	0,800
Парфюмерная отдушка	0,200
Триэтаноламин	0,119
Салициловая кислота	0,100
Глицерин	0,070
Сорбиновая кислота	0,030

Характеристики кремов электропроводящих

	Крем электропроводящий Care Cream	Крем электропроводящий Face Cream	Крем электропроводящий Anticellulite Cream
Плотность, г/ см ³	1	1	1
pH	5,55	6,35	5,50
Вязкость, мПа*с	90000-150000	90000-150000	90000-150000
Удельное электрическое сопротивление, Ом *м	2,75-5,11	1,1-3,6	3,07-5,43
Максимально допустимое время контактирования с кожей, мин	60	60	60

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы класса Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам). Упаковка обеззараженных медицинских отходов класса Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Гарантии

Компания INDIBA гарантирует, что изделие не содержит дефектов материалов и изготовления.

Гарантия на аппарат действительна в течение 2 (двух) лет с момента покупки профессиональным пользователем. Гарантия распространяется на любого владельца аппарата в течение гарантийного срока в отношении дефектов материалов и изготовления.

Гарантия на возвратные и активные электроды, рукоятки для электродов зависит от их частоты использования и ухода. Гарантия на возвратные электроды, рукоятки для электродов составляет два года, а на электроды (емкостные и резистивные) - один год.

Изделие было протестировано только с использованием электропроводящих кремов производства INDIBA, поэтому гарантия действительна только при использовании данных электропроводящих кремов.

Производитель, сборщик, установщик или лицензированный импортер несут ответственность за безопасность, надежность и правильное функционирование изделия, если:

1. Все операции по сборке, настройке и ремонту выполняются физическим лицом или компанией, уполномоченной производителем.
2. Электрическая система в процедурной комнате соответствует применимым требованиям.
3. Аппарат используется в соответствии с утвержденным руководством по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любой сбой в работе или неисправность аппарата, если была нарушена целостность защитной пломбы.
2. Любые другие сбои в работе или неисправность аппарата, не связанные с дефектами материалов и изготовления, а также неправильная эксплуатация изделия.
3. Ремонт произведен неавторизованным сервисным центром или ремонт произведен с использованием деталей от неодобренных INDIBA производителей.
4. Ущерб нанесен в результате работы любой стороны, кроме производителя, дилера или авторизованного сервисного агента

Чтобы получить техническую поддержку от производителя, дилера или авторизованного сервисного агента в течение гарантийного срока, владелец должен:

1. Отправить письмо (по электронной почте cs@indiba.com или по почте) компании INDIBA, дилеру или авторизованному сервисному агенту с описанием проблемы в течение гарантийного срока.
2. Если необходимо отправить аппарат для проверки или ремонта, в прилагаемом письме указывается серийный номер аппарата (расположен на маркировке на задней панели аппарата), полное имя владельца, полный адрес, номер телефона и номер счета-фактуры (если это применимо) вместе с именем дилера или уполномоченным сервисным агентом, у которого был приобретен аппарат.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Маркировка, идентифицирующая изделие, прикреплена к задней панели аппарата. Формат серийного номера следующий: YY S XXXX MM

YY: дата производства

S: идентификация модели

XXXX: номер
производства

MM: месяц
производства

96

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЯ
"Изделие не производит нагрев"	• Убедитесь в правильности подключения всех элементов изделия, и особенно возвратного электрода. • Если индикатор рядом с кнопкой запуска/остановки процедуры на пульте управления выключен, кнопка начала процедуры не была нажата. • Если индикатор рядом с кнопкой запуска/остановки процедуры мигает, а таймер отсчета времени процедуры был остановлен, аппарат ждет контакта между электродом и пациентом. • Если индикатор рядом с кнопкой запуска/остановки процедуры не мигает, а таймер отсчета времени процедуры отсчитывает время, аппарат обнаружил контакт с пациентом. • Если проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки INDIBA.
Емкостный электрод вызывает дискомфорт (острая боль)	• Убедитесь, что на поверхности электрода нет трещин или небольших отверстий. В противном случае замените электрод. • Во время процедуры вся поверхность электрода должна контактировать с кожей. Если только определенная часть электрода контактирует с кожей, весь ток проходит через эту небольшую область, что может вызвать дискомфорт. • Если область обработки неровная, используйте электрод меньшего размера. • Убедитесь, что на кожу было нанесено достаточное количество электропроводящего крема. • Если проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки INDIBA.
Индикатор готовности не включается при нажатии выключателя питания.	• Убедитесь, что кабель питания экранированный не поврежден и что он правильно подключен к сети питания. • Убедитесь, что розетка сети питания работает правильно (для проверки подключите к разъему другое изделие). • Убедитесь, что два входных предохранителя не сработали. В противном случае замените их новыми предохранителями с такими же характеристиками (см. раздел «Технические данные»). • Если проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки INDIBA.

[Handwritten signature]

Пульт управления не работает (индикатор не включается при нажатии кнопки запуска/остановки процедуры).

Аппарат не всегда реагирует на кнопки пульта управления, даже если индикатор пульта управления включается при нажатии кнопки запуска/остановки процедуры.

Батарейка разряжена. Замените ее.

- Если пульт управления по-прежнему не работает после замены батарейки (индикатор не включается при нажатии кнопки запуска/остановки процедуры), убедитесь, что батарейка находится в правильном положении.
- Если проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки INDIBA.
- Переместите пульт управления поближе к аппарату, т.к. могут мешать помехи (диапазон работы пульта управления составляет от 4 до 5 метров).
- Проверьте уровень заряда батарейки на экране настроек. Если батарейка разряжена, замените их.
- Если проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки INDIBA.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Когда аппарат обнаруживает нестандартную ситуацию, он прекращает процедуру и отображает сообщение об ошибке. Каждая нестандартная ситуация кодируется при помощи номера ошибки. Аппарат отображает номер ошибки, краткое описание и любую доступную дополнительную информацию.

- При возникновении большинства ошибок единственным вариантом для пользователя является подтвердить ошибку. Это необходимо для защиты пользователя, пациента, и самого аппарата. Затем аппарат автоматически отключается.

- Некоторые ошибки позволяют пользователю продолжать использовать аппарат после подтверждения ошибки.

Если произошла ошибка, запишите всю информацию, представленную на экране, и обратитесь в службу технической поддержки INDIBA.

Глоссарий технических терминов

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

Способность электронного изделия не создавать помех другим изделиям и не быть чувствительным к помехам от других изделий.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ряд условий, которым должно соответствовать изделие, чтобы обеспечить безопасность людей во время нормальной эксплуатации.

ЧАСТОТА

Количество повторений одного цикла за одну секунду. Это понятие относится к частоте переменного тока. Единица измерения: Герц (Гц).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Электрический потенциал изделия или электрической системы. Разность электрических потенциалов между двумя точками схемы. Единица измерения: Вольт (В).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Физическая переменная, которая выражает количество электричества, протекающего через проводник за определенную единицу времени. Единица измерения: Ампер (А).

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Сопротивление потоку тока, обеспечиваемое проводником. Единица измерения: Ом (Ом).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНС

Связь между напряжением переменного тока, приложенным к цепи, и током, создаваемым при нагрузке, не имеющей чистого сопротивления, а вместо этого содержащей конденсатор. Единица измерения: Ом (Ом).

КОНДЕНСАТОР

Система проводников, разделенных диэлектрической (изолирующей) мембраной, которая хранит электрический заряд. В идеальных условиях он не рассеивает энергию, а просто сохраняет, а затем передает ее.

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ (ВА)

Произведение напряжения, приложенного к импедансу, и проходящего через него тока. Применимо, когда нагрузка представляет собой импеданс, а не омическое сопротивление.

АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ (В)

Количество энергии, потребляемой за единицу времени, которое рассеивается в ткани пациента.

АКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД

Электрод, в котором наблюдается наибольшее увеличение температуры из-за плотности тока.

АКТИВНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД (РЕЗИСТИВНЫЙ)

Активный металлический электрод без изолирующего слоя.

АКТИВНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД (ЕМКОСТНОЙ)

Активный металлический электрод с изолирующим слоем.

ВОЗВРАТНЫЙ ПЛОСКИЙ ЭЛЕКТРОД

Это также электрод, но он имеет гораздо большую площадь поверхности, чем активный электрод. Поэтому плотность тока в нем ниже, благодаря чему температура в окружающей ткани не увеличивается.

ВОЗВРАТНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД

Это также электрод, но он имеет гораздо большую площадь поверхности, чем активный электрод. Поэтому плотность тока в нем ниже, благодаря чему температура в окружающей ткани не увеличивается.

Информация об электромагнитной совместимости

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия

Изделие предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке		
Испытания на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Радиопомехи по СИСР 11	Группа 1	В изделии используется кондуктивно связанная высокочастотная энергия, необходимая для функционирования самого изделия. Таким образом, излучение изделия не вызывает помех в соседнем электронном оборудовании.
Радиопомехи по СИСР 11	Класс Б	Изделие предназначено для использования в помещениях для бытовых целей, а также в помещениях, непосредственно подключенных к низковольтным распределительным электрическим сетям (электрическим сетям общего назначения)
Гармонические составляющие потребляемого тока по МЭК 61000-3-2	Класс А	
Соответствие изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера, вызываемых ТС, нормам стандарта МЭК 61000-3-3	Соответствие	

ЭМС 101

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª,
. DOY FE

[Handwritten signature]

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость

Изделие предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	±6 кВ - контактный разряд ±8 кВ - воздушный разряд	±6 кВ - контактный разряд ±8 кВ - воздушный разряд	Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30%
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4	±2 кВ - для линий электропитания ±1 кВ - для линий ввода-вывода	±2 кВ - для линий электропитания ±1 кВ - для линий ввода-вывода	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки.
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	±1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод" ±2 кВ - при подаче помех по схеме "провод-земля"	±1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод" ±2 кВ - при подаче помех по схеме "провод-земля"	
Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	<5% UT (провал напряжения >95% UT) в течение 0,5 периода; 40% UT (провал напряжения 60% UT) в течение пяти периодов; 70% UT (провал напряжения 30% UT) в течение 25 периодов; <5% UT (провал напряжения >95% UT) в течение 5 с	<5% UT (провал напряжения >95% UT) в течение 0,5 периода; 40% UT (провал напряжения 60% UT) в течение пяти периодов; 70% UT (провал напряжения 30% UT) в течение 25 периодов; <5% UT (провал напряжения >95% UT) в течение 5 с	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю изделия требуется непрерывная работа в условиях прерываний сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание изделия от батареи или источника бесперебойного питания.
Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8	3 А/м	0.3 А/м	Напряженность магнитного поля промышленной частоты в назначенном месте установки должна соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки.

Примечание: UT - уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.

Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6	3 В (среднеквадратичное значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц	3 В (среднеквадратичное значение)	Расстояние между используемым портативным/мобильным средством радиосвязи и любой частью изделия, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос: рассчитывается по формуле: $d=1,2\sqrt{P}$ для полосы частот от 80 кГц до 800 МГц: $d=1,2\sqrt{P}$ для полосы частот от 800 кГц до 2,5 МГц: $d=2,3\sqrt{P}$ где P - номинальное значение максимальной выходной мощности в Вт в соответствии со значением, установленным изготовителем; d - рекомендуемый пространственный разнос, м. Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой должна быть ниже уровня соответствия в каждой полосе частот. Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком 
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3	3 В/м в полосе от 80 МГц до 2.5 ГГц	3 В/м	

Примечание:

1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля;
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей;
3. Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не может быть определена расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения изделия выше применимых уровней соответствия, то следует проводить наблюдения за работой изделия с целью проверки ее нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение изделия.

Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и изделием

Изделие предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь изделия может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) изделием, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи			
Номинальная максимальная выходная мощность передатчика P, Вт	Пространственный разнос d, м, в зависимости от частоты передатчика		
	d=1,2√P в полосе от 150 кГц до 80 МГц	d=1,2√P в полосе от 80 до 800 МГц	d=2,3√P в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.37	0.73
1	1.20	1.20	2.30
10	3.70	3.70	7.30
100	12.00	12.00	23.00

Примечание:

1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля;
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей;
3. При определении рекомендуемых значений пространственного разнеса d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

INDIBA, S.A. («Индиба С.А.», Испания)

C/ Moianès, 13

Pol. Ind.

Casablanques

08192 Sant

Quirze del Vallès

Barcelona

(Spain)

Телефон: +34 93 265 55 22

Факс: +34 93 576 30 40

www.indiba.com



Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020, DOY FE.

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC® SYSTEM



Приложение 1
**ПРОГРАММА
МОНИТОРИНГА**

Руководство по эксплуатации

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE


Содержание

05	1. Системные требования
05	1.1 Функциональные предупреждения
06	2. УСТАНОВКА
07	2.1 Первый запуск программного обеспечения
09	2.2 Создание пользователей
11	3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
11	3.1 Пациенты
12	3.2 Описание пациента (состояние)
13	3.3 Процедура
16	3.4 История
18	4. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
19	5. ПЕЧАТЬ
19	5.1 Вставка персонализированного логотипа
19	5.2 Печать истории
20	5.3 Печать состояния
20	5.4 Этапы печати
21	6. НАСТРОЙКИ
21	6.1 Управление пользователями
21	6.2 Язык
21	6.3 Версия
22	7. ДАННЫЕ
22	7.1 Экспорт базы данных
22	7.2 Импорт базы данных
23	7.3 Объединение базы данных
24	8. ПРОТОКОЛЫ
24	8.1 Экспорт протокола
25	8.2 Импорт протокола

ВАЖНО: Директива 95/46 / ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 года гарантирует защиту физических лиц в отношении обработки персональных данных и свободного перемещения таких данных. Соблюдение требований данной директивы обязательно в Европейском Союзе.

Страна, в которой вы находитесь, независимо от того является ли она частью Европейского Союза или нет, возможно, утвердила свое собственное законодательство в этой области. Если это так, необходимо соблюдать эти требования.

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020, DOY FE

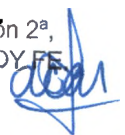

1. Системные требования

Программа мониторинга имеет определенные минимальные системные требования.

Убедитесь, что используемая среда соответствует этим требованиям, прежде чем приступить к установке:

- Разрешение экрана 1024 x 768 или выше для оптимального отображения.
- Браузер, поддерживающий HTML5 (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
- Компьютер с подключением Wi-Fi. Если ваш компьютер не имеет модуля Wi-Fi или модуль Wi-Fi не активирован, обратитесь в службу поддержки производителя данного компьютера.

Требования к ЦП, ОЗУ, внутренней памяти и т.д. такие же, как и для операционной системы. Большая внутренняя память может потребоваться для хранения данных большего числа пациентов.

1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Убедитесь, что браузер не настроен на периодическую очистку данных истории.
- Не используйте приватный просмотр в браузере. База данных не будет работать.
- Браузер должен сохранять историю, кэш данных и переменные сессии.
- Всегда создавайте резервную копию перед удалением истории браузера.
- Каждый браузер использует свою базу данных.

2. Установка

В составе аппарата также есть уникальный пароль доступа к программному обеспечению для контроля за осуществлением процедур (далее по тексту – программа мониторинга). Данную программу следует скачать по указанному адресу:


www.indibadeepcare.com/en/downloads/

и ввести требуемый пароль, программа мониторинга установится на компьютер.

Программа скачивается в сжатой папке формата .ZIP. В ZIP-папке находятся два файла: один - папка для копирования, а другой - та же самая сжатая папка, которая будет сохранена в качестве резервной копии.



1. Перетащите папку из файла .ZIP на жесткий диск компьютера (ее необходимо скопировать в корневой каталог памяти).
2. Чтобы не тратить время на поиск программы мониторинга, можно создать ярлык, перейдя в место копирования папки, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Создать ярлык».

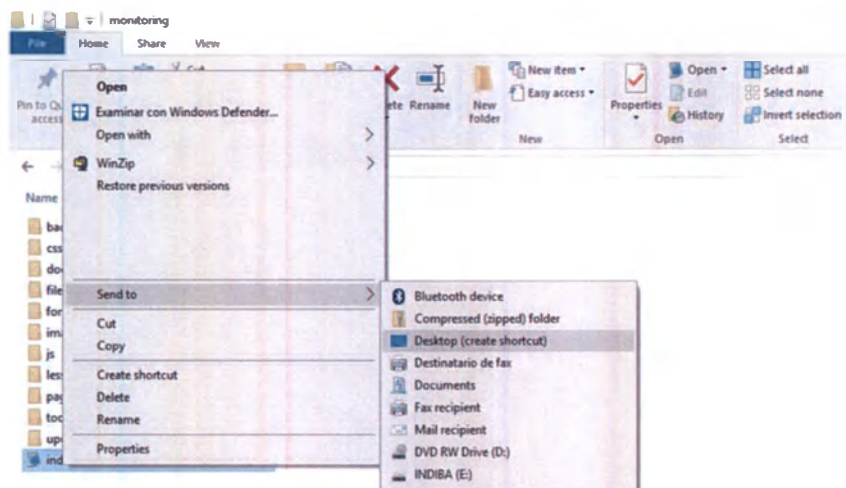


2.1 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Перед первым запуском программы мониторинга необходимо установить беспроводное соединение между компьютером и аппаратом. Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите на значок Wi-Fi компьютера (он будет мигать белым цветом) и подождите несколько секунд.
2. Подключите компьютер к беспроводной сети, которая будет отображаться как INDIBA_xxxxxxx, где xxxxxxx - это серийный номер аппарата.
3. Введите пароль, чтобы установить соединение. Пароль - wifiindiba.
4. После установления соединения значок Wi-Fi компьютера изменится на синий и продолжит мигать.

Теперь вы можете запустить на своем компьютере программу мониторинга в первый раз. Для этого выберите файл index.html и запустите его. Если на вашем терминале установлено несколько браузеров (Chrome, Firefox или Safari), тогда «запустить как» (правая кнопка мыши на index.html) и появится «открыть с помощью», где вы можете выбрать необходимый браузер. Через несколько секунд отобразится экран, приведенный ниже:


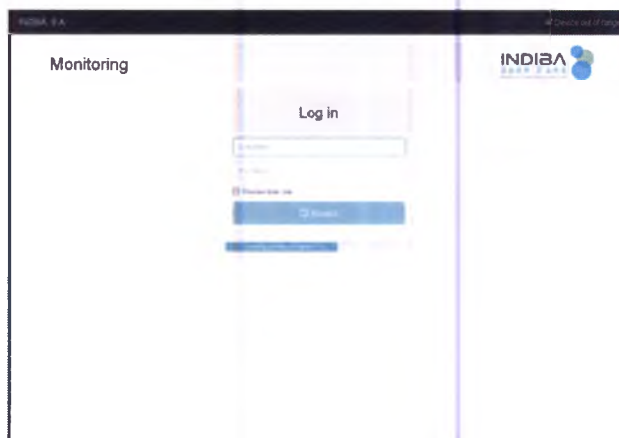


После подтверждения создания базы данных проводимых процедур, программа мониторинга запустится и появится окно введения логина и пароля пользователем.

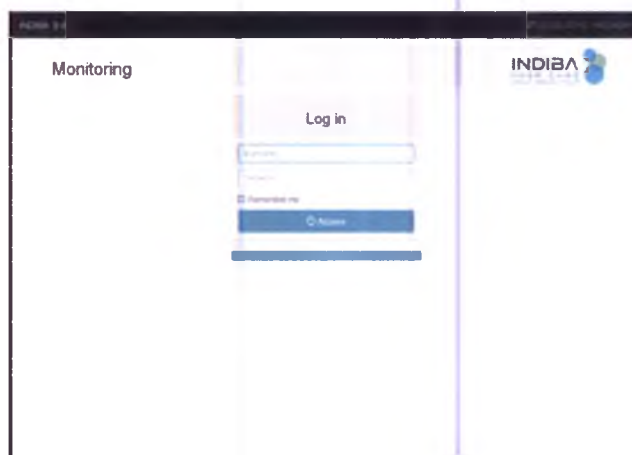

При первом запуске программа устанавливает Wi-Fi-соединение с аппаратом. Если вы успешно подключили беспроводную связь, программа ожидает получения данных с аппарата.

ВАЖНО: Пользователь не сможет работать с программой мониторинга, пока не будет выполнено подключение к аппарату. После подключения для работы с программой необходимо только имя пользователя и пароль.

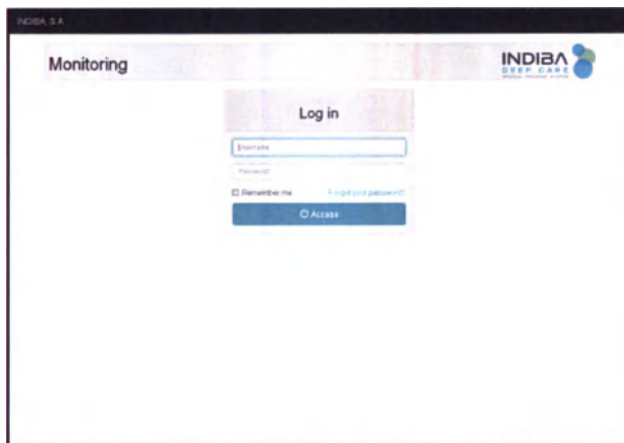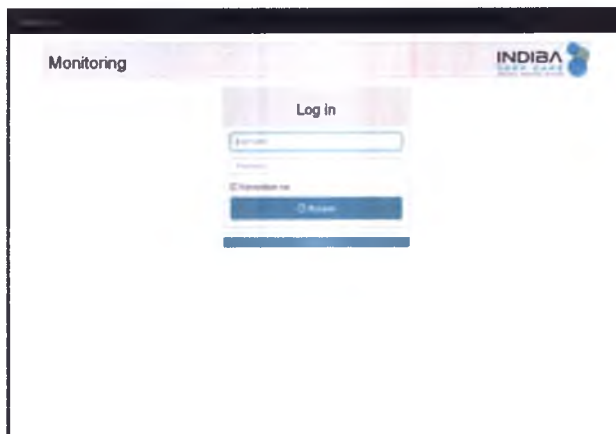


Имя пользователя по умолчанию - indiba, пароль - indiba.

ВАЖНО: если флажок «Запомнить меня» не установлен, пользователю необходимо будет каждый раз вводить свои данные для входа в программу при ее запуске.

ВАЖНО: после входа с данными по умолчанию программа обнаруживает, что существует только этот пользователь, и вместо перехода в окно пациента перенаправляет в окно создания пользователя. Так будет происходить при каждом входе пользователя в программу, пока не будет создан новый профиль пользователя вместо профиля по умолчанию.

В случае, если у пользователя возникли проблемы со входом в программу с данными по умолчанию, то пользователь может начать работу с программой, запросив временный пароль у отдела обслуживания клиентов INDIBA. Для этого нажмите на ссылку «Forgot your password?», и появится всплывающее окно, содержащее код. Его необходимо сообщить в отдел обслуживания клиентов INDIBA, позвонив по телефону, указанному в контактных данных производителя, либо написав на электронную почту cs@indiba.com, после чего специалисты компании INDIBA пришлют вам новый сгенерированный пароль, действительный в течение 7 дней.

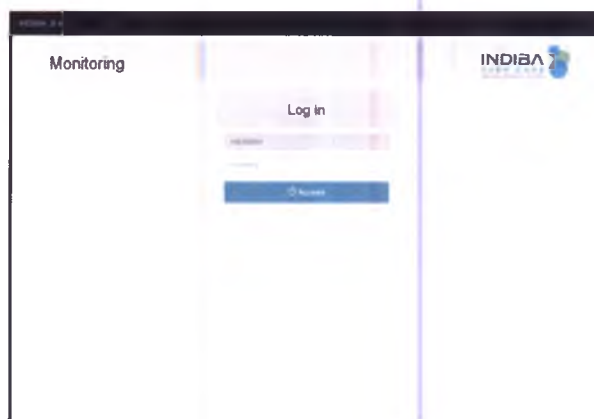


После ввода логина и пароля программа откроет окно пользователей.


2.2 СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Экран создания пользователя появляется сразу после ввода заданных по умолчанию логина и пароля - indiba.


Этот экран выглядит так:

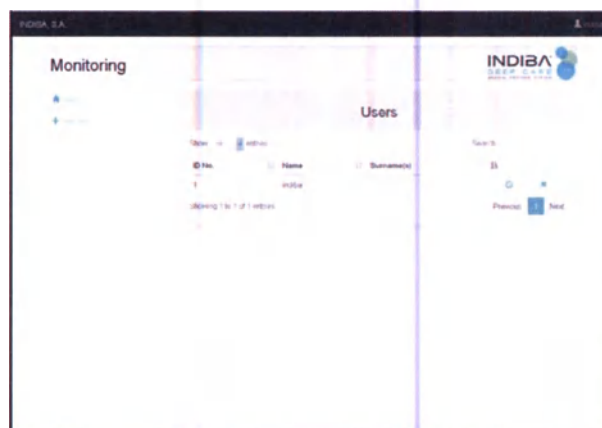

Ниже объясняется, как создать нового пользователя с именем «Джон Симпсон». Для этого заполните поля всплывающего меню, указав идентификационный номер пользователя, имя, фамилию и пароль. Для ввода пароля необходимо использовать только строчные буквы.

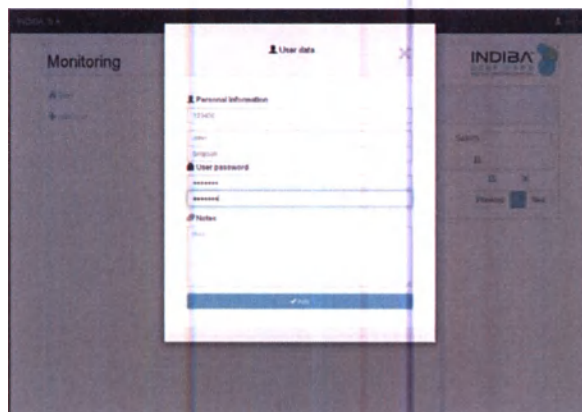

После создания пользователя появится экран с отображением всех пользователей в базе данных. На этом экране вы можете редактировать запись  или удалить её .

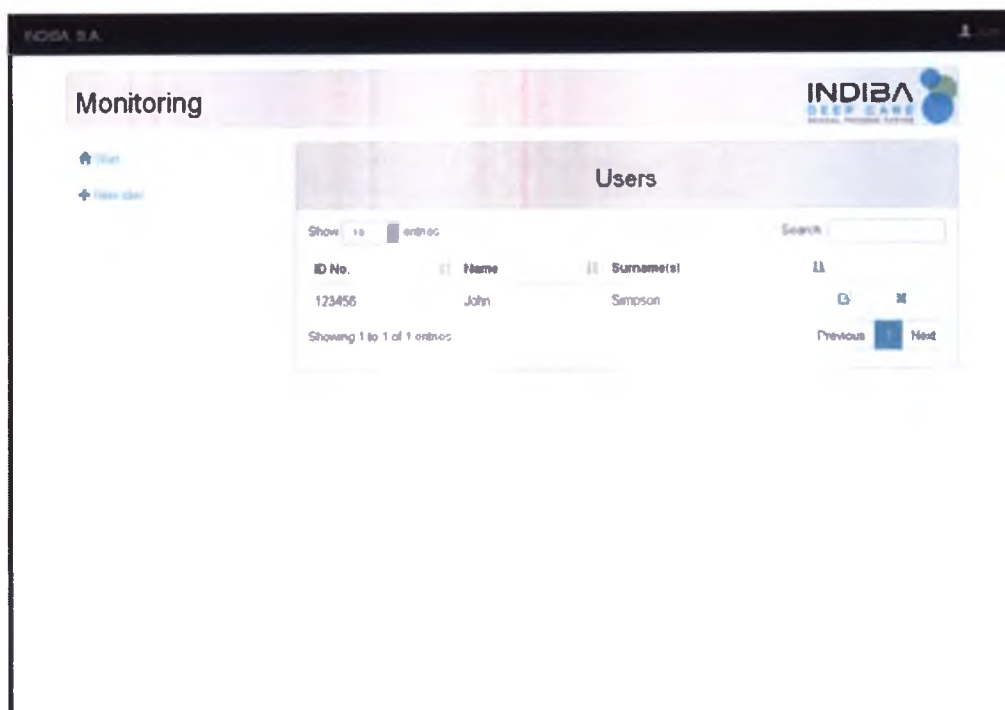

Если вы не хотите создавать нового пользователя, нажмите на ссылку «Start» и перейдите на главный экран (пациенты), используя данные indiba для входа в программу. Для создания новых пользователей см. пункт 7.1 «Управление пользователями», где подробно описан данный процесс.

Если вы хотите войти как новый пользователь, вы должны выйти из аккаунта Indiba (на черной панели «Выйти») и войти как новый пользователь.


ВАЖНО: Каждый раз, когда вы входите со стандартными данными indiba, программа будет перенаправлять на экран пользователей, независимо от того, были ли созданы уже другие пользователи или нет. Если вы входите как другой пользователь, программа перейдет на главный экран (раздел 3.1 Пациенты), где вы можете работать с программой.

3. Эксплуатация

3.1 ПАЦИЕНТЫ


Стартовый экран — это экран пациентов. Все операции с пациентами могут выполняться на этом экране, в дополнение к процедурам, основанным на количестве переданной энергии и на времени процедуры, для которых для создания отчета и результатах используются только данные, полученные на самом аппарате.

Стартовый экран выглядит так:

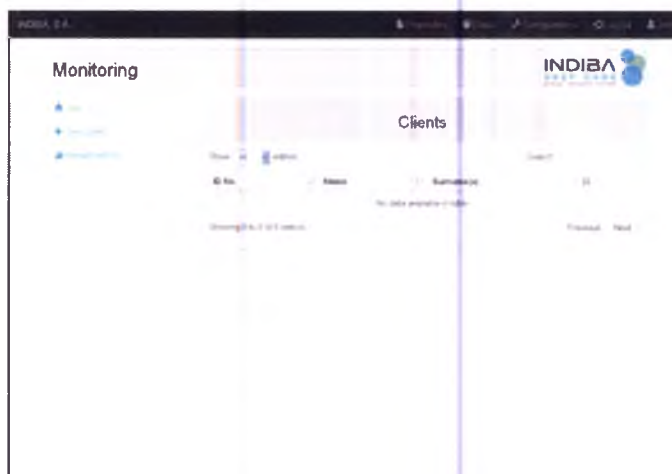

Вверху на черной полосе отображается выпадающее меню («Protocols» -ПРОТОКОЛЫ, «Data» - ДАННЫЕ и «Configuration» - НАСТРОЙКИ) и возможность выхода из аккаунта текущего пользователя ("Log out"). Слева пользователи могут добавлять новых пациентов («New Client») или выполнять процедуру без добавления нового пациента, но с получением данных о проведенной процедуре ("Manual settings"). В середине экрана находится список пациентов, которых можно искать напрямую и сортировать в порядке возрастания или убывания, нажимая значки в верхней части.


Чтобы создать нового пациента, нажмите «New Client», и появится следующее всплывающее меню:

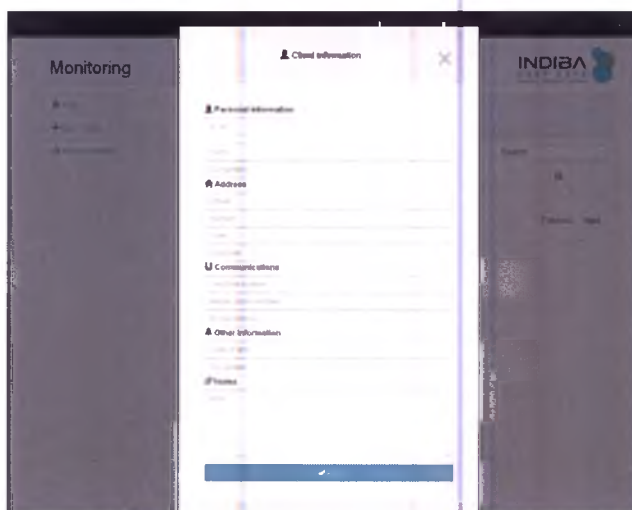

Заполните обязательные поля и нажмите "Add" - Добавить.

ВАЖНО: Поле [Идентификационный номер] нельзя изменить после создания пользователем. При неправильном вводе номера - необходимо его удалить и ввести повторно. Если вы удалите этого пользователя, все связанные данные будут удалены.


После создания пациента отобразится следующий экран:

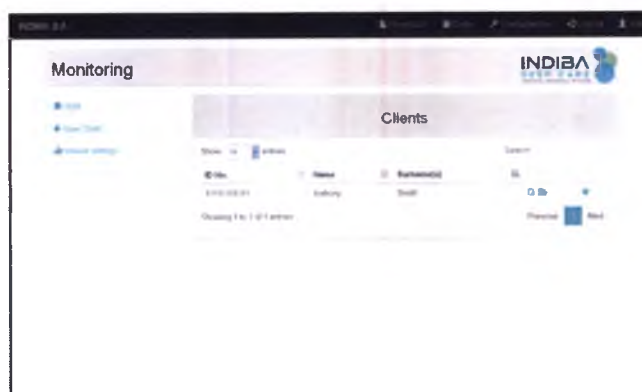


Ряд значков отобразится для каждого пациента: первый - для редактирования записи , второй - чтобы перейти к истории болезни этого пациента  и третий, чтобы удалить пациента . После удаления пациента, связанные с ним данные будут удалены из базы данных.

3.2 ОПИСАНИЕ ПАЦИЕНТА (СОСТОЯНИЕ)


Нажмите на имя пациента, чтобы просмотреть его описание. Экран описания пациента имеет схожую структуру, что и предыдущий экран. Тем не менее, черная панель инструментов в верхней части экрана теперь показывает только имя пользователя. Еще одно изменение: имя пациента отображается над таблицей с информацией о пациенте.

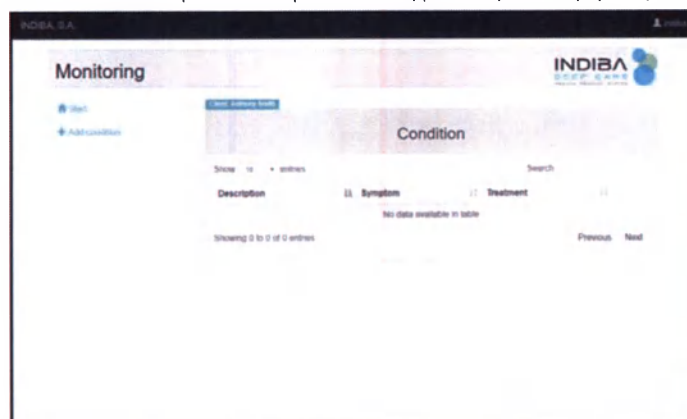

Чтобы добавить описание пациенту, нажмите «Add condition» -Добавить описание, и появится новое всплывающее меню для ввода необходимой информации:

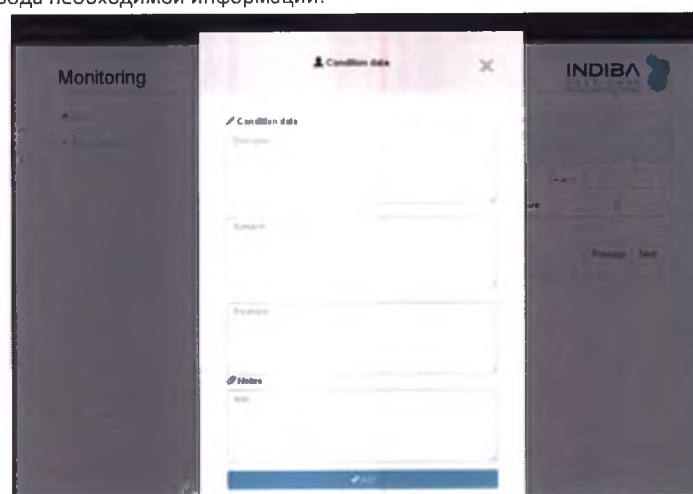

После того, как информация была введена, нажмите «Add» - Добавить», и отобразится следующий экран:

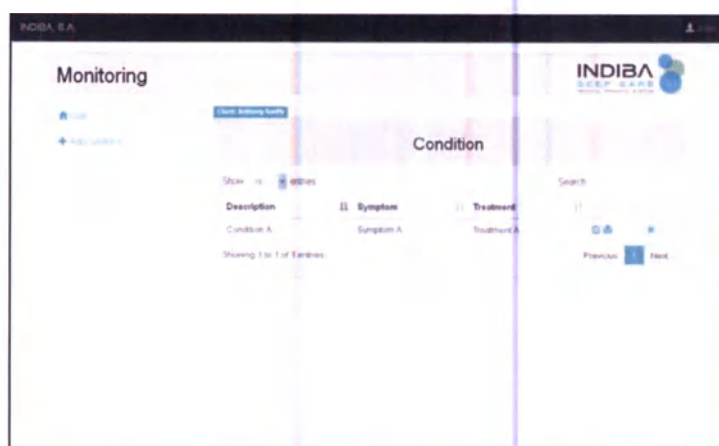


Для каждого состояния отобразится серия значков: первый - для редактирования записи , второй - чтобы напечатать параметры процедуры, проведенной для этого состояния  и третий - удалить состояние . При удалении описания все связанные процедуры удаляются из базы данных.


Нажмите на состояние, чтобы отобразить соответствующие процедуры, которые были выполнены для данного состояния.

3.3 ПРОЦЕДУРА


Структура экрана процедур такая же, как и у предыдущих экранов. Пользователь может просмотреть процедуры, которые уже были выполнены или добавить новые. Имя пользователя и соответствующее состояние отображаются над таблицей процедур.

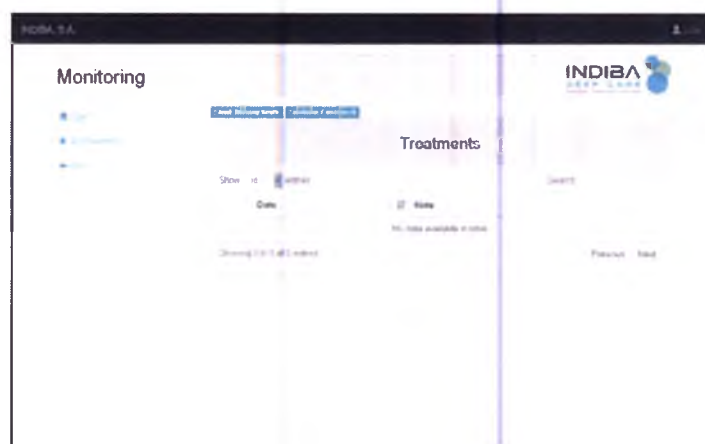


Нажмите «Add treatment» - Добавить процедуру, чтобы перейти к следующему экрану:

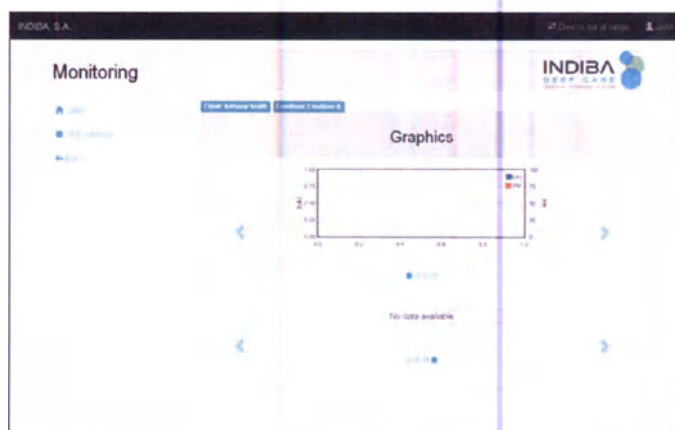

В верхней части экрана, в дополнение к имени пользователя, появляется новое сообщение «Device out of range» - Аппарат вне диапазона. Если аппарат имеет Wi-Fi-соединение с компьютером, через несколько секунд имя аппарата и его серийный номер появятся в верхней части экрана, как показано на следующем рисунке:

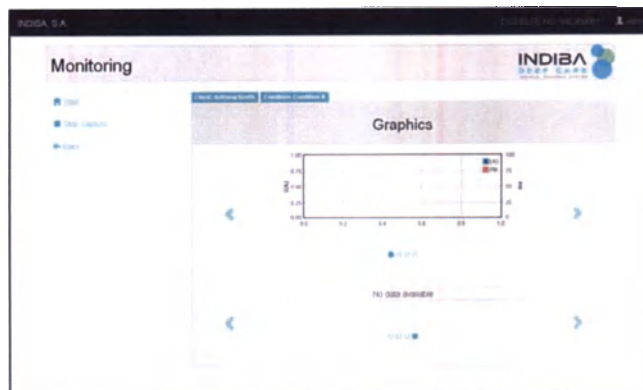

Когда аппарат начинает работу, график меняется со временем, показывая последние две минуты процедуры. Нажмите на боковые стрелки, чтобы отобразить данные в другом формате.

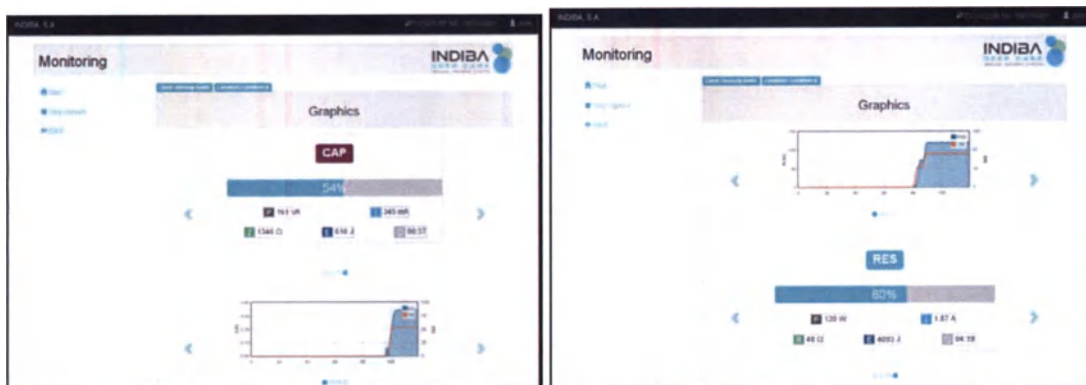


Когда процедура переходит на новый этап, для него будет построен новый график. Переключение этапов будут продолжаться до тех пор, пока пользователь не остановит процедуру на аппарате или сбор данных прекратится нажатием кнопки «Stop capture» - Остановить сбор данных - в программе, и в этом случае на графике будут отображены данные всей процедуры, а не только последние две минуты.

Нажав «Back» - Назад, вы вернетесь на предыдущую страницу.


После получения данных о процедуре, экран процедур будет выглядеть следующим образом:




Поле примечания («Notes») остается пустым в конце процедуры, но его можно редактировать, нажав на значок редактирования.

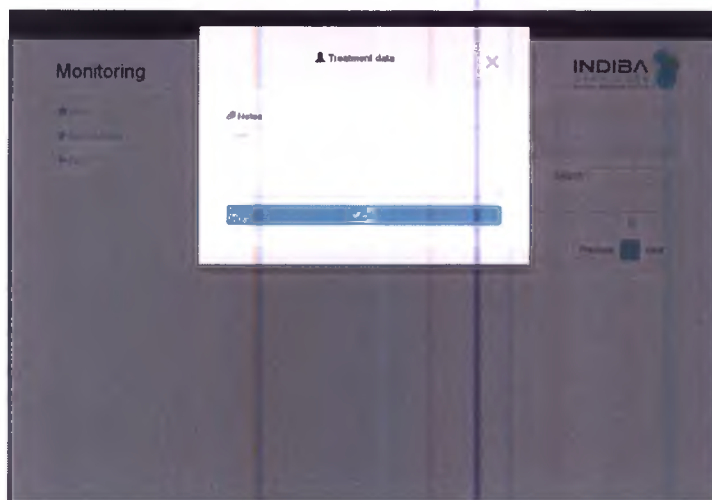

На экране процедур есть стрелка, направленная вниз, которая показывает, что можно раскрыть дополнительную информацию. После нажатия на стрелку отобразится следующее:

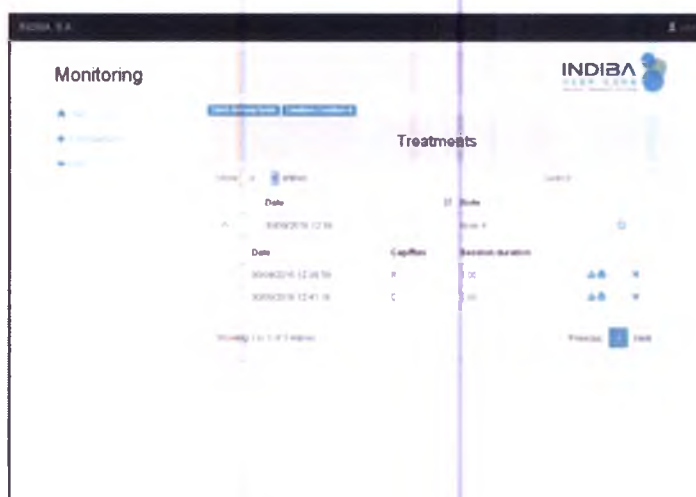


Если пользователь нажимает на процедуру и по какой-либо причине данные не появляются, или он нажимает на процедуру, которая не содержит данных, на экране процедуры отобразится следующее:

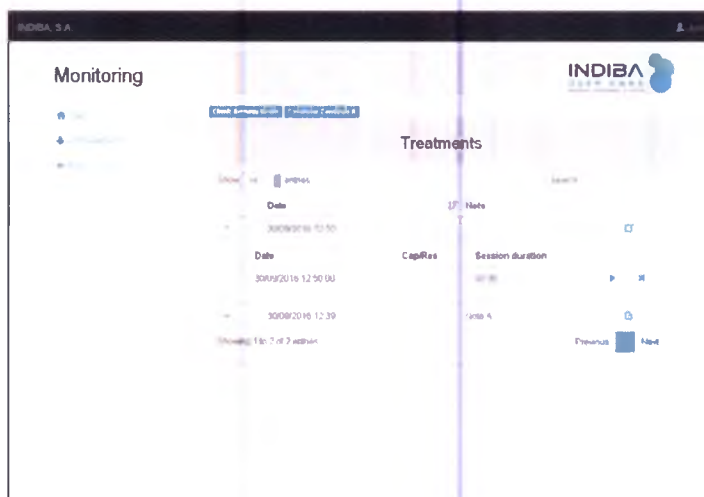


Процедура была прервана. Продолжительность сеанса 00:00. Нажать на значок ► для перезапуска сеанса или ✕ для удаления сеанса.

В ходе обычной процедуры, нажмите значок 📊 для отображения результатов данного этапа, которые затем могут быть использованы для анализа.

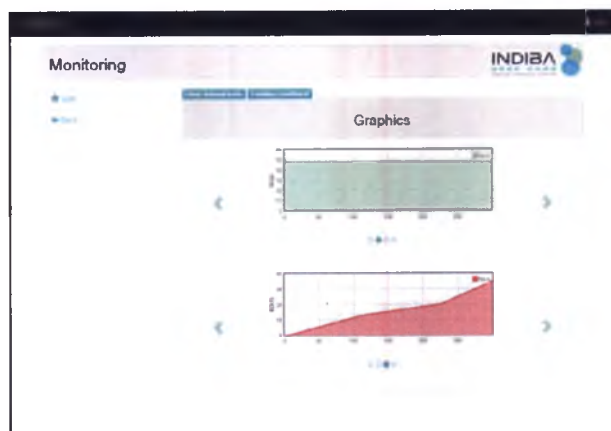


3.4 ИСТОРИЯ

На стартовом экране, нажмите на значок 📄 около пациента для доступа к экрану истории.

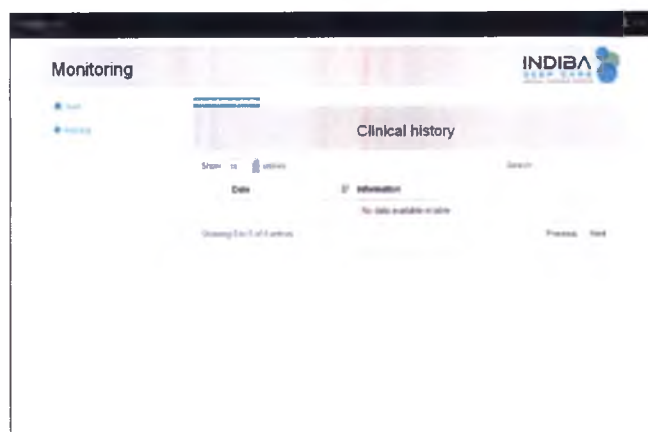


Чтобы добавить запись, нажмите «Add log» - Добавить журнал, и появится выпадающее меню для добавления необходимой информации.

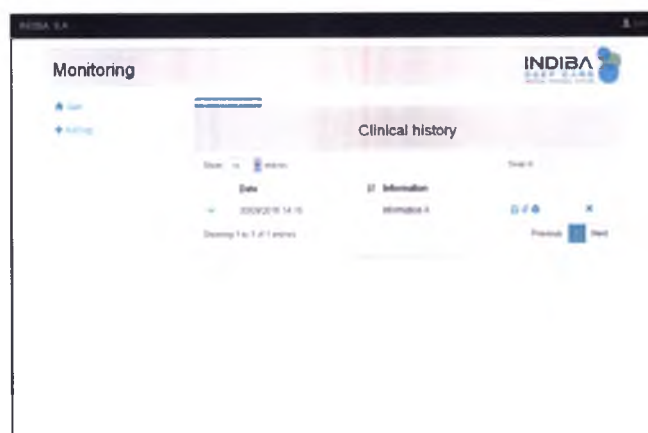


Если у пациента есть файлы с данными, их можно привязать к записи, нажав на значок . Все файлы, предоставленные пациентами, должны быть сохранены в подпапке папки, где была установлена программа мониторинга.


Отобразится экран, который выглядит следующим образом:

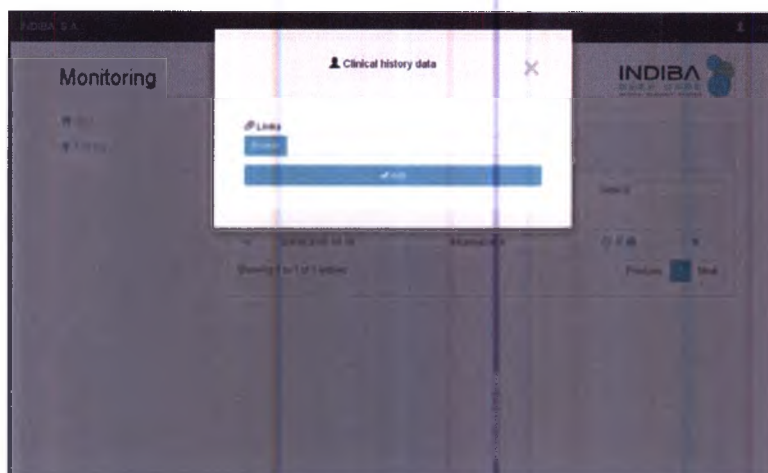

Нажмите «Browse» - Обзор, чтобы выбрать требуемый файл:

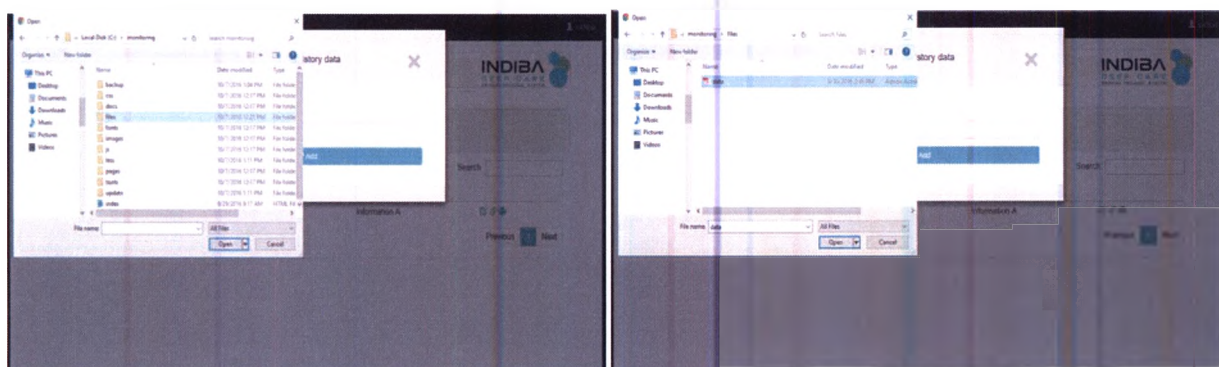

После этого запись будет выглядеть так:

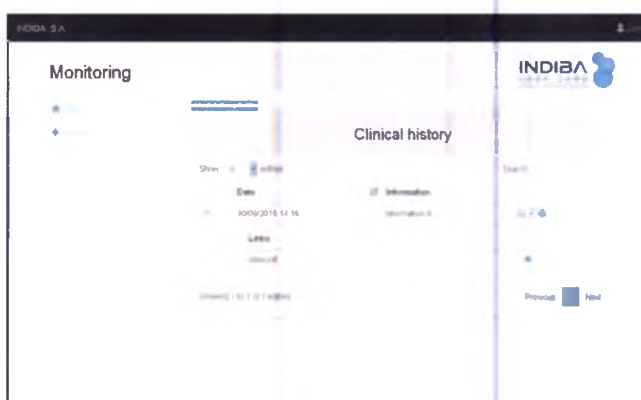


Чтобы удалить запись, все связанные файлы должны быть удалены в первую очередь. Если в браузере установлен нужный плагин, ссылки на файлы откроются в новом окне.

ВАЖНО: Если ссылка на файл удаляется из базы данных, связанный файл НЕ удаляется с компьютера. Файлы могут быть окончательно удалены только в той папке, в которой они были сохранены.

4. Ручная настройка

Чтобы выполнить процедуру для пациента, не заноса информацию о нем в программу, и предоставить отчет о проведенной процедуре, нажмите «Manual settings» - Ручная настройка. Как показано на следующих рисунках, процедура выполняется также, как и процедура для сохраненного пациента.

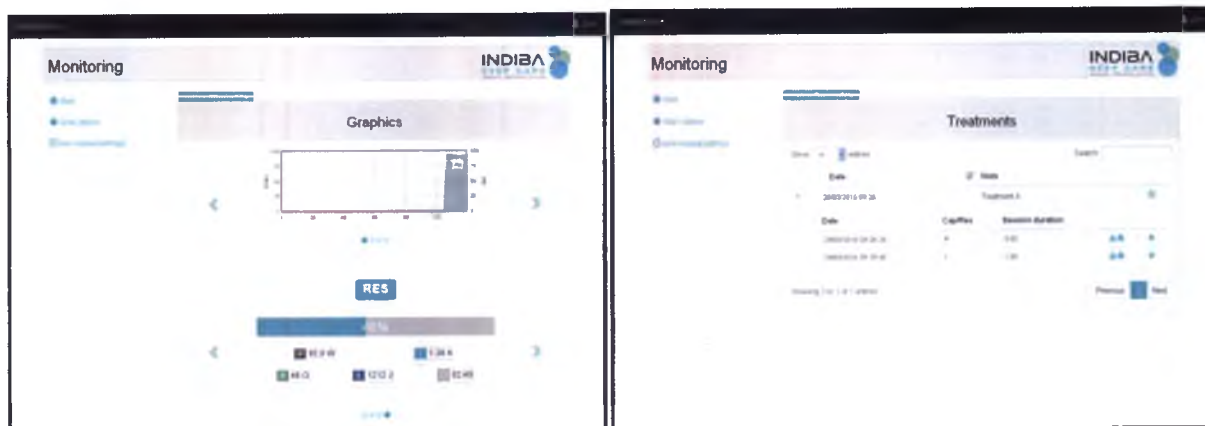

ВАЖНО: Данная процедура не будет сохранена в общей базе данных и будет потеряна, когда пользователь вернется к стартовому экрану или нажмет «New manual settings» - Новая ручная настройка.

5. Печать

5.1 ВСТАВКА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ЛОГОТИПА

Логотип должен быть в формате jpg и находиться в папке «Images» (внутри папки «monitoring») с именем logo.jpg. Если высота файла превышает 100 точек, браузер пропорционально адаптирует размер.



Это же изображение будет использоваться в трех отчетах, подготовленных программой.

5.2 ПЕЧАТЬ ИСТОРИИ

Нажмите на значок  в нужной записи истории, и отобразится следующий экран:




Нажмите "Print" - Печать, и появится меню со списком доступных принтеров.

ВАЖНО: кнопка «Print» не будет отображаться на распечатанном документе.


5.3 ПЕЧАТЬ СОСТОЯНИЯ

Чтобы распечатать состояние, нажмите «Print» на экране состояний. Отобразится следующий экран:

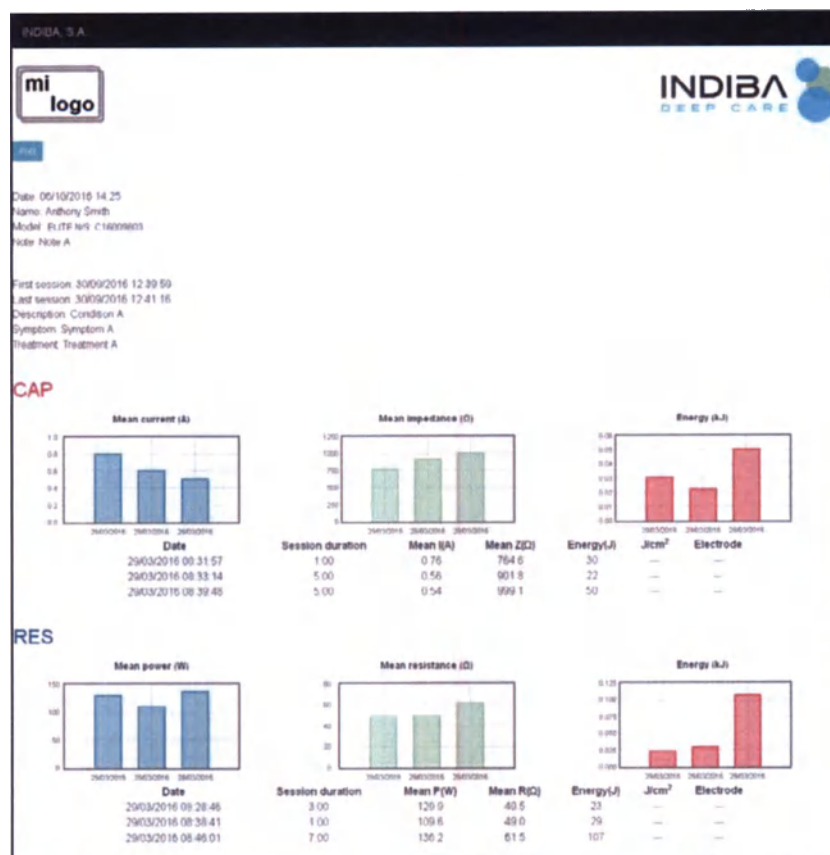


5.4 ЭТАПЫ ПЕЧАТИ

Далее представлены примеры отчетов для резистивных и емкостных режимов.

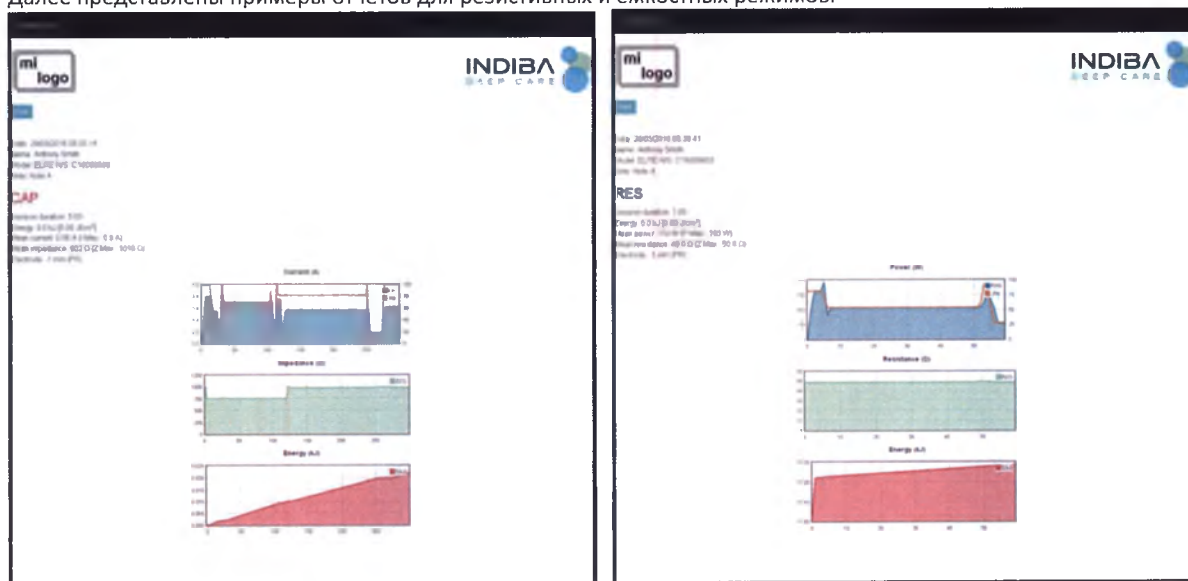

6 Настройки

Меню настроек можно открыть в стартовом окне. Нажмите на кнопку «Configuration» в левом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню настроек.

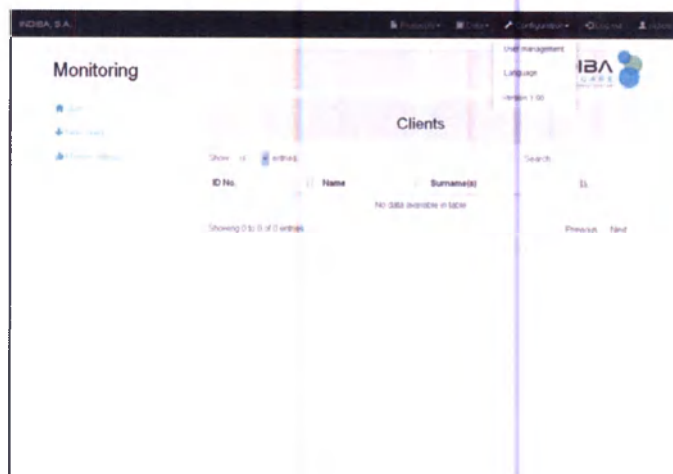


6.1 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Нажмите на кнопку «User management», чтобы перейти к экрану управления пользователями, описанному в разделе «Создание пользователя».

6.2 ЯЗЫК

Нажмите на кнопку «Language», чтобы установить нужный язык интерфейса программы. Новый язык будет применен только тогда, когда пользователь вернется на главную страницу.

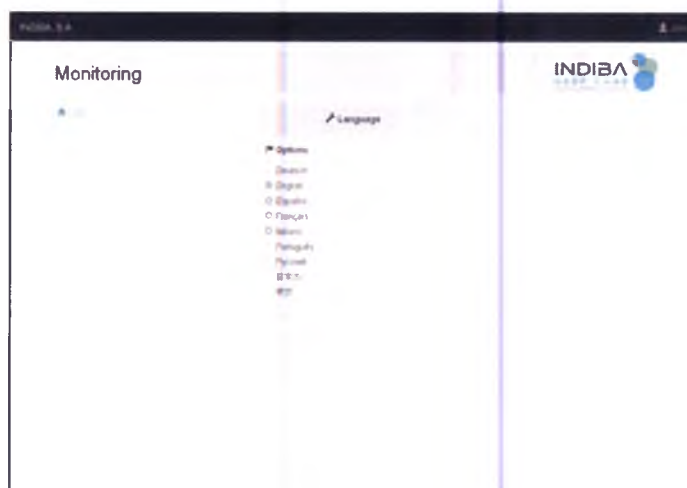


6.3 ВЕРСИЯ

В поле «Version» указывается только версия программы.

7 Данные

7.1 ЭКСПОРТ БАЗЫ ДАННЫХ

Резервное копирование базы данных должно выполняться регулярно, чтобы избежать любой потенциальной потери данных. Предупреждающее сообщение «ВНИМАНИЕ! Не забудьте сделать резервную копию» будет отображаться каждые пятнадцать дней, если копия не была сделана.

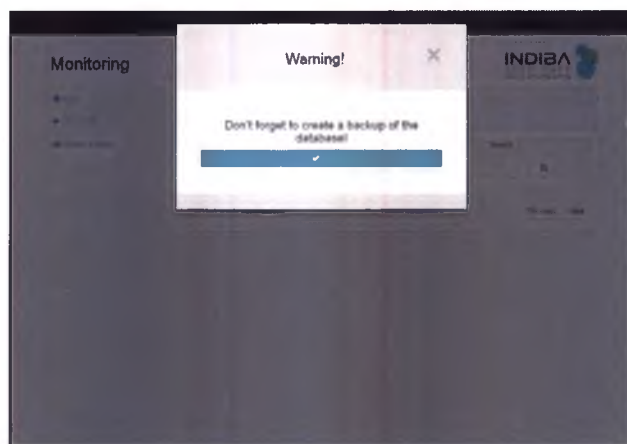

ВАЖНО: Программа отображает только сообщение; автоматическое копирование не выполняется.


Чтобы сделать копию, перейдите в меню данных, нажмите «Export DB» - Экспорт БД (базы данных), и появится всплывающее меню.

В зависимости от браузера, пользователю будет предложено сохранить базу данных в папке программы либо использовать папку браузера по умолчанию. Рекомендуется сохранять файл в подпапке резервного копирования в папке «Monitoring», чтобы при необходимости его можно было легко найти.


ВАЖНО: В имени файла указана дата создания копии в формате ДДММГГ.

7.2 ИМПОРТ БАЗЫ ДАННЫХ


Для того, чтобы экспортировать базу данных с другого аппарата, либо восстановить данные можно импортировать базу данных. Для этого нажмите на кнопку «Import DB» - Импорт БД, и появится следующий экран:

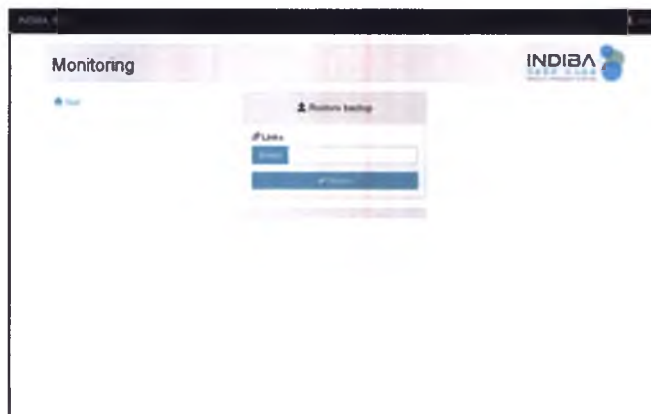

Нажать «Browse» - Обзор, чтобы выбрать файл для импорта базы данных. Если рекомендации были выполнены, файл будет находиться в подпапке «backup» в папке, где была установлена программа мониторинга.

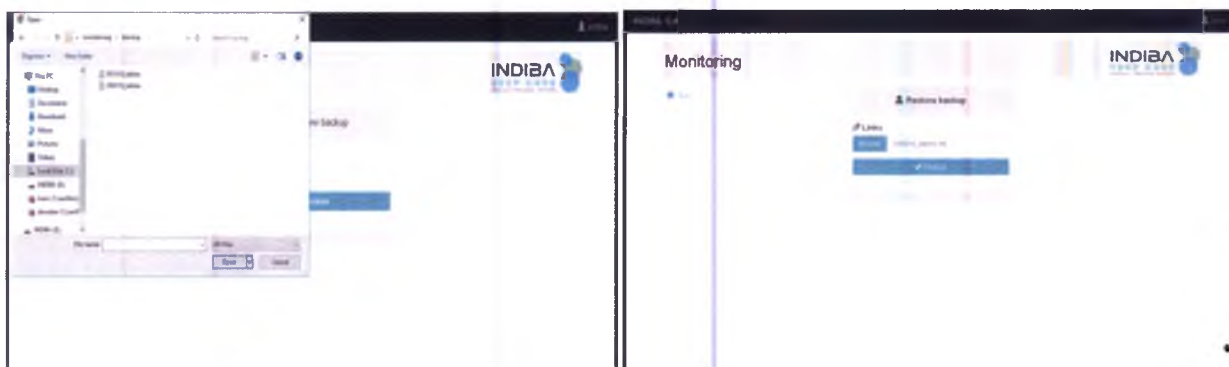


После того как файл будет выбран, необходимо нажать на кнопку «Restore»- Восстановить, появится следующий экран подтверждения:

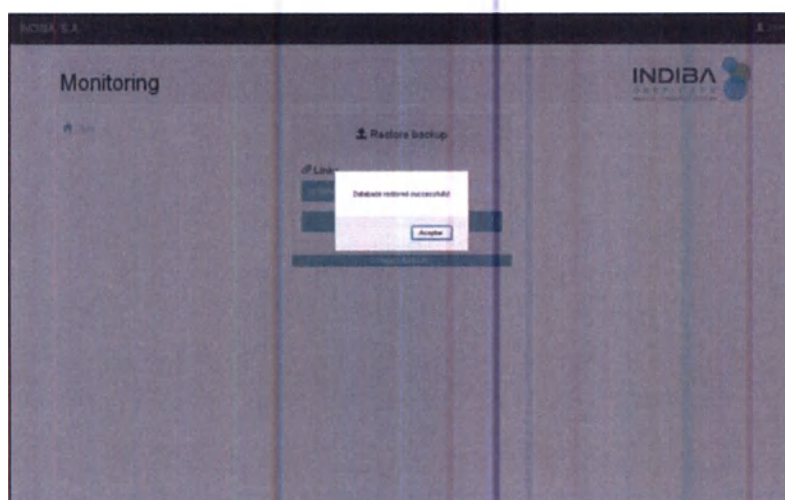

ВАЖНО: после импорта, новая база данных будет перезаписана поверх старой.

7.3 ОБЪЕДИНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Эта функция была создана для ситуации, когда существует две программы мониторинга на различных аппаратах. Чтобы объединить эти базы данных вместе на одном аппарате, соответствующий файл необходимо экспортировать, а затем получить и сохранить на другом аппарате. Последующие шаги аналогичны тем, что описаны в предыдущем разделе, и пользователь получит подтверждение на экране, если процесс был успешно завершен.

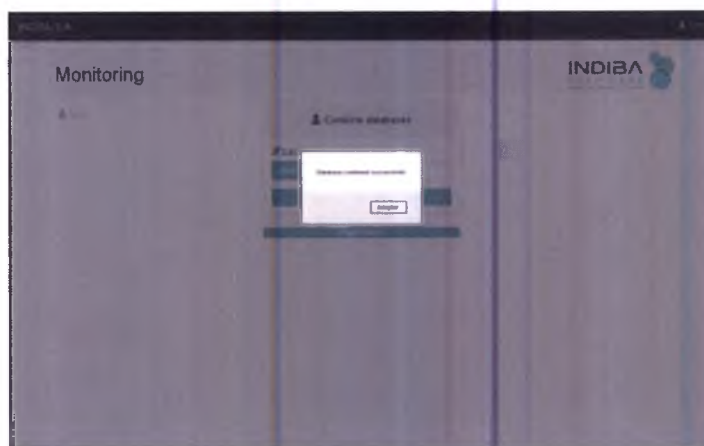

8 Протоколы

Меню протоколов позволяет импортировать и экспортировать протоколы, созданные пользователем на компьютере, и наоборот.


8.1 ЭКСПОРТ ПРОТОКОЛА

Вкладка «Export protocol» используется для отправки пользовательского протокола с компьютера на аппарат. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:


1. Нажать кнопку «Browse» и выбрать папку для отправки программы на компьютере.



2. На аппарате открыть страницу с сохраненными пользователем процедурами.

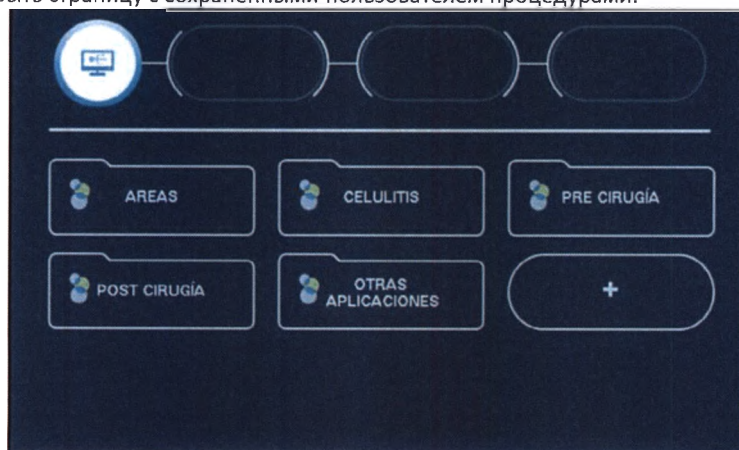


3. В программе мониторинга нажмите кнопку «Export». Через несколько секунд вы увидите на экране новую программу, ее название «TEST EXPORT».

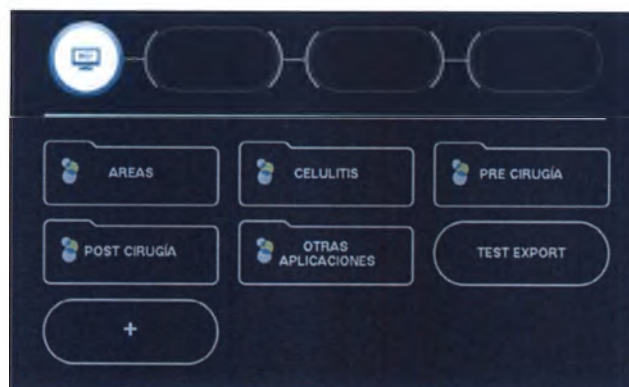


8.2 ИМПОРТ ПРОТОКОЛА

Вкладка «Import protocol» используется для отправки пользовательского протокола с аппарата на компьютер. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. На аппарате выберите, какую программу вы хотите передать на компьютер (в этом случае была использована ненастоящая программа под названием "TEST IMPORT").

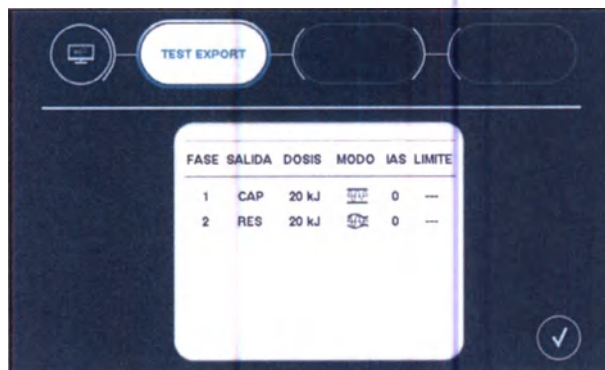

2. В программе мониторинга необходимо нажать «Save» - Сохранить.

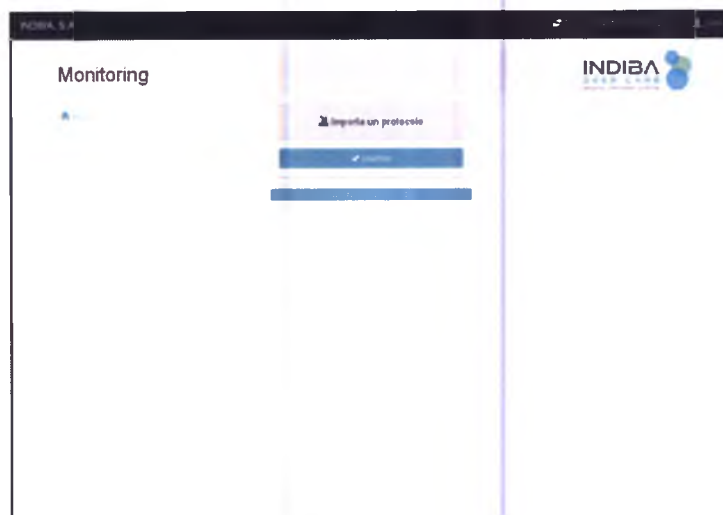

3. Далее появится всплывающее окно, чтобы начать загрузку. Файл будет загружен в папку «Загрузки» вашего браузера на компьютере.

The difference ^{is} Indiba

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

INDIBA, S.A. («Индиба С.А.», Испания)

C/ Moianès, 13

Pol. Ind.

Casablanques

08192 Sant

Quirze del Vallès

Barcelona

(Spain)

Телефон: +34 93 265 55 22

Факс: +34 93 576 30 40

www.indiba.com

CE

Ha causado el asiento nº **97** Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año **2020**, DOY FE.




ПРОТОКОЛЫ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

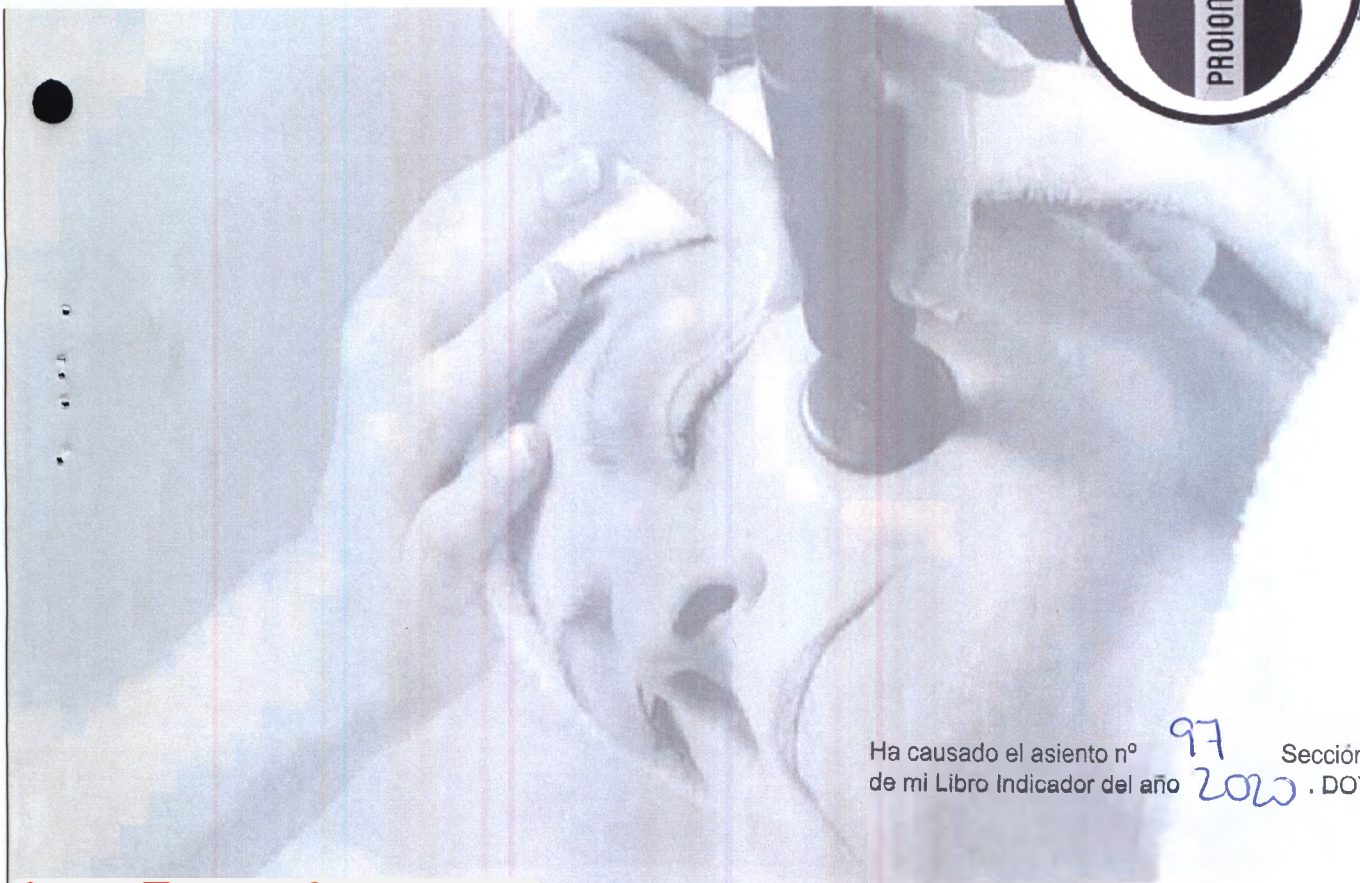


Ha causado el asiento nº 67 de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª. DOY FE.

Handwritten signature

ШЕЯ И ЛИЦО (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Подготовка ткани к операции, усиление кровотока и оксигенации.

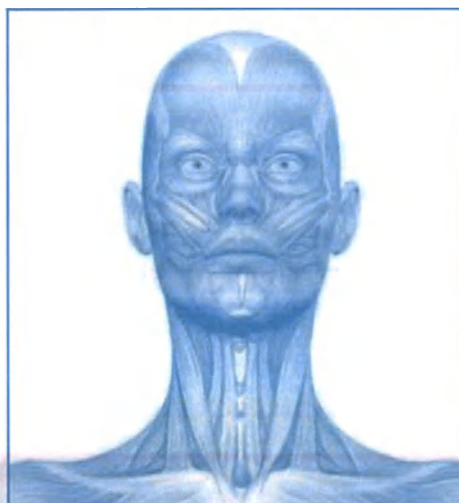

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 12 мин IAS* 7

RES 12 мин IAS* 7

CAP 6 мин IAS* 3

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: **4 сеанса**

ПРИМЕЧАНИЯ

Если требуется применение других изделий, использовать их после процедуры

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
2020. DOY FE.

[Signature]

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream
Крем электропроводящий Care Cream
Крем для лица (не входит в комплект поставки)

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

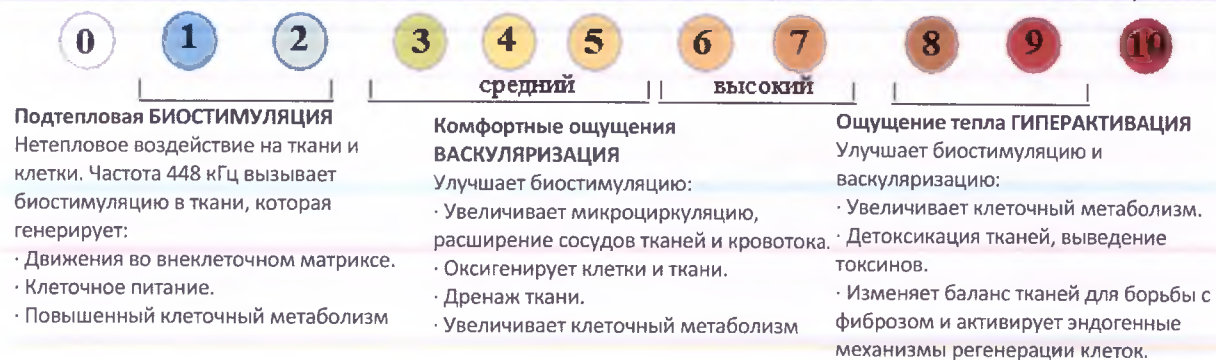

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

РУКА (30 мин)

Подготовка ткани к операции, усиление кровотока и оксигенации.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 5 мин IAS* 7

RES 5 мин IAS* 7

CAP 5 мин IAS* 3

(фиксируется на ладони)

каждая рука

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Если требуется применение других изделий, использовать их после процедуры

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

97

Sección 2ª,
DOY EE

Indiba

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

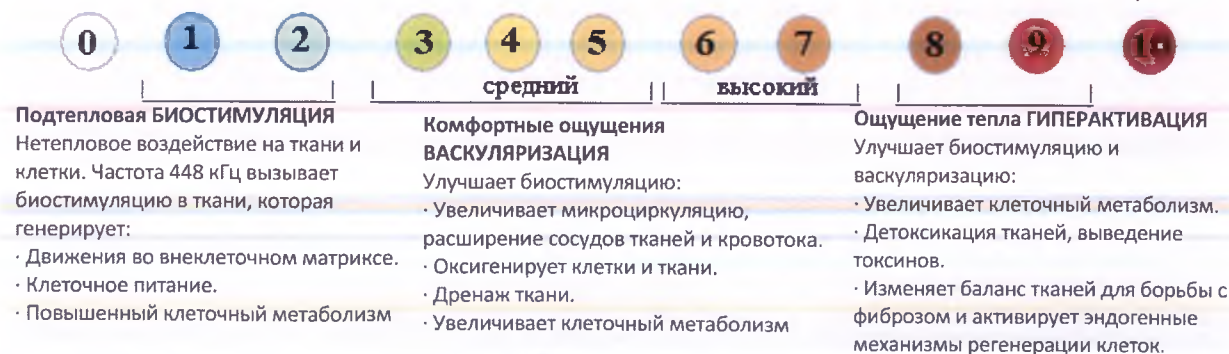

ГРУДЬ (30 мин)

Подготовка ткани к операции, усиление кровотока и оксигенации.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 5 мин IAS* 7

RES 5 мин IAS* 7

CAP 5 мин IAS* 3

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: **4 сеанса**

ПРИМЕЧАНИЯ

Если требуется применение других изделий, использовать их после процедуры

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª

FF

[Handwritten signature]

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

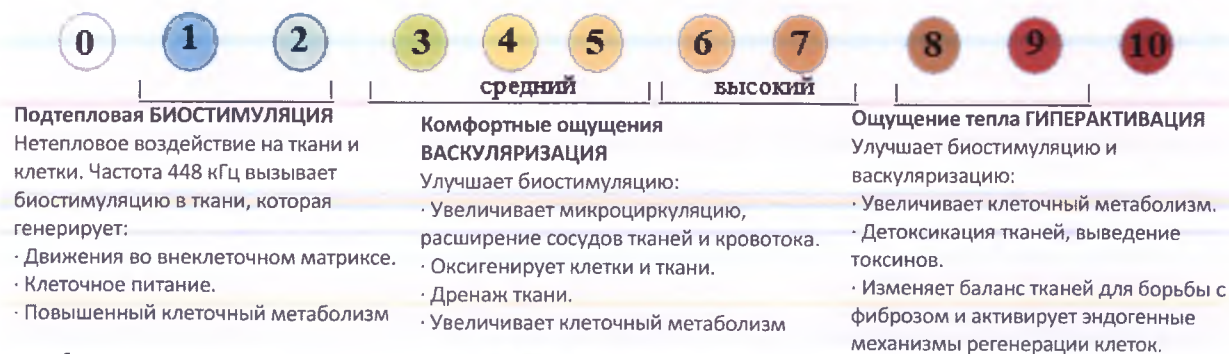

ЖИВОТ (20 мин)

Подготовка ткани к операции, усиление кровотока и оксигенации.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод в пояснично-крестцовой области.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 7 мин IAS* 7

RES 8 мин IAS* 7

CAP 5 мин IAS* 3

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Если требуется применение других изделий, использовать их после процедуры

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020

97

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

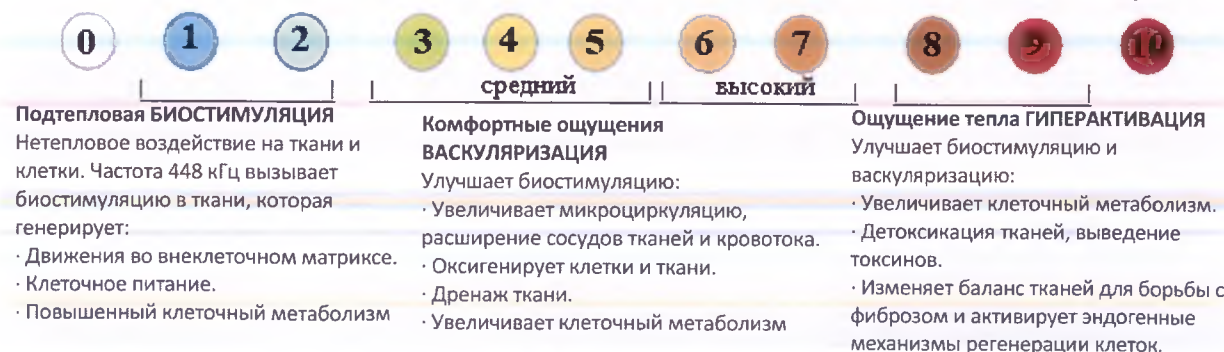

НОГИ (40 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Подготовка ткани к операции, усиление кровотока и оксигенации.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 9 мин IAS* 7
RES 9 мин IAS* 7
CAP 2 мин IAS* 3
(фиксируется на подошве)

каждая нога

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Два раза в неделю
Всего: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Если требуется применение других изделий, использовать их после процедуры

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
2020 . DOY FE

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

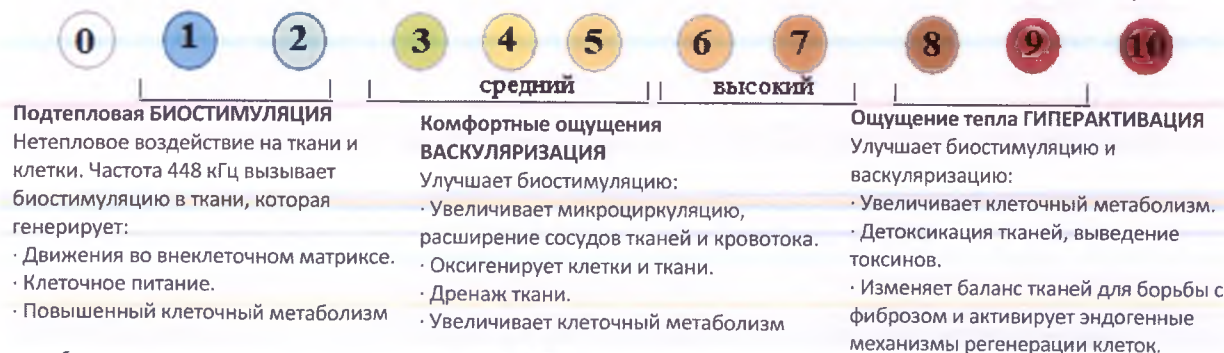

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97
2020

Sección 2ª,
DOY FE

acq

0 0 0 0 0 0

ГИНЕКОМАСТИЯ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противовоспалительное и противоотечное лечение. Ускорение процесса заживления ран. Эластичность тканей.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 28 мин IAS* 4-5

с каждой стороны

CAP 2 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа при емкостном режиме процедуры. Возможность использования в локальных точках дренажа.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 4-5 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Лечение начинается после снятия швов. В случаях дряблости кожи было бы желательно продолжить с протоколом из группы «Подтяжка кожи»

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания.

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97 Sección 2ª,
2020 . DOY F.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ				Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ			
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:				Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:			
· Движения во внеклеточном матриксе. · Клеточное питание. · Повышенный клеточный метаболизм			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока. · Оксигенирует клетки и ткани. · Дренаж тканей. · Увеличивает клеточный метаболизм				· Увеличивает клеточный метаболизм. · Детоксикация тканей, выведение токсинов. · Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.			

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выданного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ИНКАПСУЛЯЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Лечение с целью уменьшения фиброза.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 3 мин IAS* 5

RES 10 мин IAS* 5

CAP 2 мин IAS* 3

КАЖДУЮ ГРУДЬ

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использование в локальных точках дренажа.

СЕАНСЫ

Один или два раза в неделю

Всего: 6 сеансов до устранения фиброза

ПРИМЕЧАНИЯ

Лечение начинается после появления перипротезного фиброза

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

На causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020.

Sección 2ª,
DOXFE

ИНКАПСУЛЯЦИЯ ИМПЛАНТАТОВ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Законодательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, платно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

МАММОПЛАСТИКА (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противоотечное и обезболивающее лечение.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 2 | КАЖДАЯ ГРУДЬ
CAP 5 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и лечение шрамов согласно протоколу

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: 6 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Желательно также проводить лечение шейного и спинного отдела позвоночника, чтобы уменьшить напряжение после операции на мышце. Увеличить IAS до 5 на этапе подострого течения.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020.

97

Sección 2ª,
DOY-FE

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

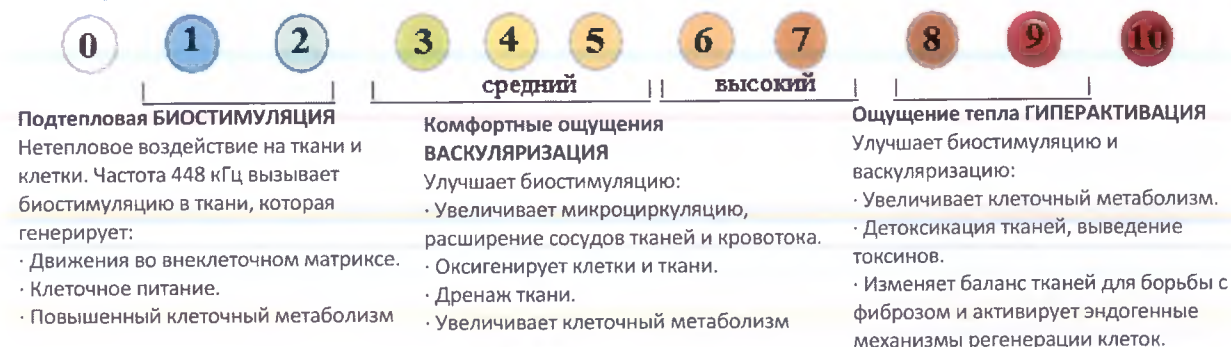

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается копировать, воспроизводить или передавать его полностью или частично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСТ-ЛИПОСАКЦИЯ

1 ЧАСТЬ (20 - 40 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Реабсорбция синяков и гематом и гомогенизация области.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине: возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовой области

Лежа на животе: возвратный плоский электрод на брюшной полости

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 18 - 38 мин IAS* 3 (в зависимости от размера области лечения)

RES 2 мин IAS* 3 (фиксируется на подошве стопы при лечении ног)

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений в направлении дренажа. Возможно использовать в локальных точках дренажа.

СЕАНСЫ

Один-два раза в неделю

Всего: **4-6 сеансов**

ПРИМЕЧАНИЯ

Во время процедуры, следует отметить, гематомы могут менять цвет. Узлы после липосакции, ощутимые при пальпации, быстро нормализуются

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª

2020 . DOY

ПОСТ-ЛИПОСАКЦИЯ 1 ЧАСТЬ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения					Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ		
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ					Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:		
· Движения во внеклеточном матриксе.			Улучшает биостимуляцию:					· Увеличивает клеточный метаболизм.		
· Клеточное питание.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.					· Детоксикация тканей, выведение токсинов.		
· Повышенный клеточный метаболизм			· Оксигенирует клетки и ткани.					· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.		
			· Дренаж тканей.							
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, платно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., вытиснутого в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСТ-ЛИПОСАКЦИЯ

2 ЧАСТЬ (20 - 40 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Лечение дряблости кожи и фиброза, которые остаются после операции.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине: возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовой области

Лежа на животе: возвратный плоский электрод на брюшной полости

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 8 - 18 мин IAS* 5 (в зависимости от размера области лечения)

RES 10-20 мин IAS* 7 (в зависимости от размера области лечения)

RES 2 мин IAS* 3 (фиксируется на подошве стопы при лечении ног)

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений в направлении дренажа. Возможно использовать в локальных точках дренажа.

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: 10 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Во время процедуры, следует отметить, гематомы могут менять цвет. Узлы после липосакции, ощутимые при пальпации, быстро нормализуются

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

asda

ПОСТ-ЛИПОСАКЦИЯ 2 ЧАСТЬ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Улучшает биостимуляцию:			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, платно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

НЕДАВНИЕ РУБЦЫ (15 - 20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее лечение.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине: возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовой области

Лежа на животе: возвратный плоский электрод на брюшной полости

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 - 15 мин IAS* 3 (в зависимости от размера рубца)

CAP 5 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медленные и плавные движения

СЕАНСЫ

Один или два раза в неделю

Всего: 6 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

При наличии швов, не проводить процедуру непосредственно на рубце, обрабатывать область вокруг

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.
Sección 2ª

[Signature]

НЕДАВНИЕ РУБЦЫ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

КЕЛОИДНЫЕ И ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЕ РУБЦЫ (10 - 20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее лечение.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине: возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовой области

Лежа на животе: возвратный плоский электрод на брюшной полости

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 3 - 5 мин IAS* 7 (в зависимости от размера рубца)

RES 5-13 мин IAS* 7

CAP 2 мин IAS* 3

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проводить массаж во время резистивного режима

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 6 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Научить пациента выполнять разминающий массаж дома

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE
Sección 2ª

КЕЛОИДНЫЕ И ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЕ РУБЦЫ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Face Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

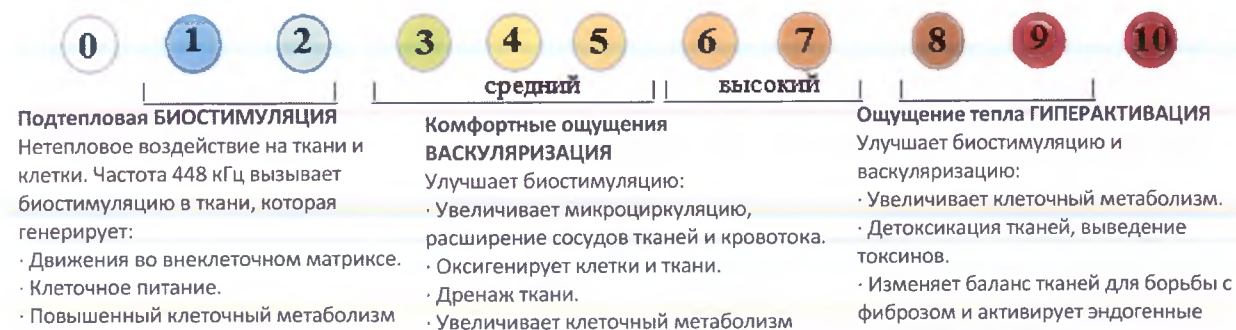


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается воспроизводить или передавать его полностью или частично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА (20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противоотечное, обезболивающее лечение для ускорения процесса заживления.

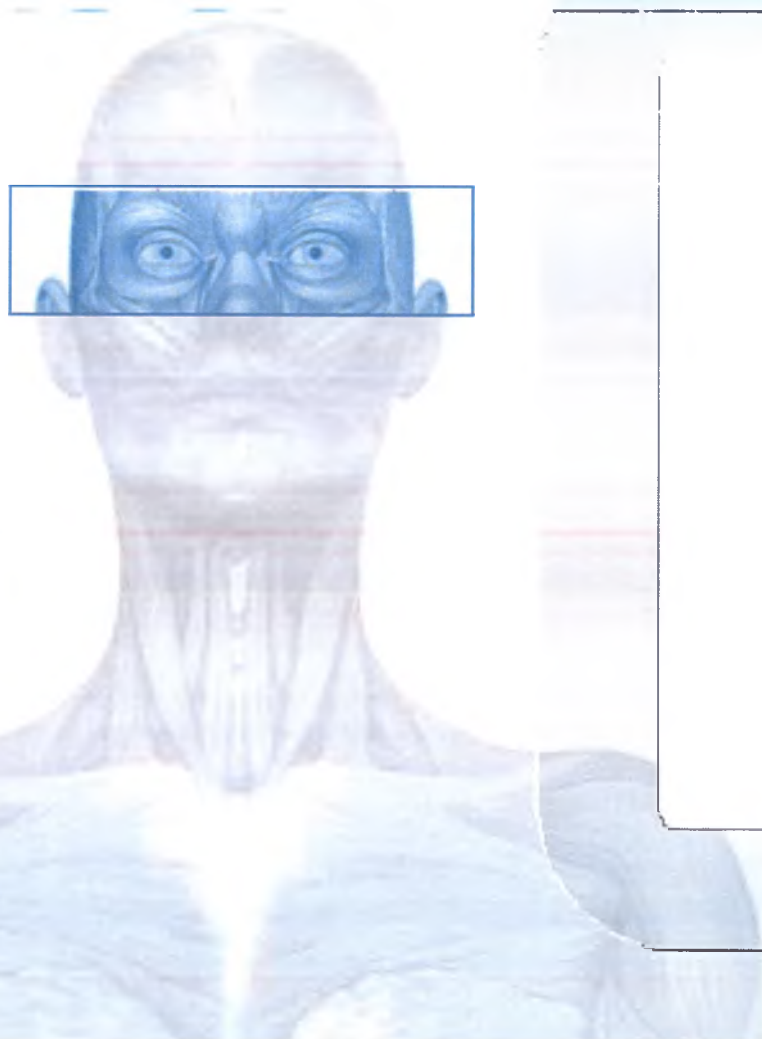

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 8 мин IAS* 3 | КАЖДЫЙ ГЛАЗ
RES 2 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медленные, плавные движения в направлении висков и узлов.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 6 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Если электрод RES некомфортен для пациента, не используйте его при начальных сеансах

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOYEE

БЛЕФАРОПЛАСТИКА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Face Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

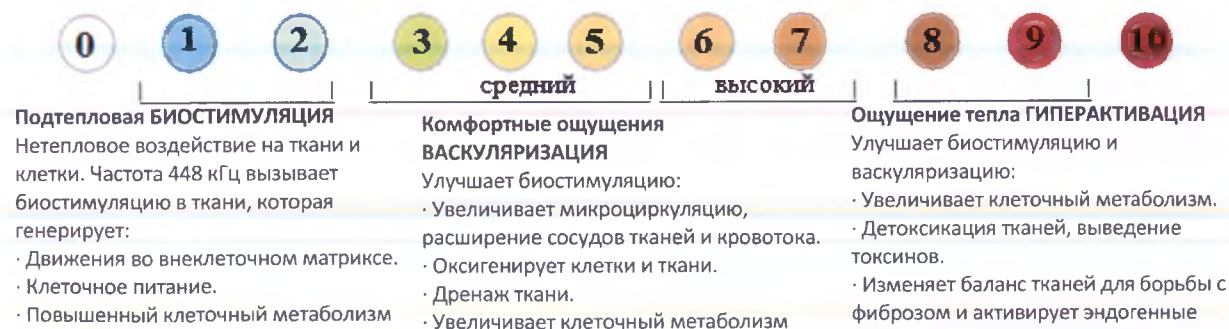

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается его воспроизводить или передавать его третьим лицам, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

РИНОПЛАСТИКА (20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противоотечное, обезболивающее лечение для ускорения процесса заживления.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 15 мин IAS* 3

RES 5 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медленные, плавные движения в направлении узлов.

СЕАНСЫ

Один-два раза в неделю

Всего: 6 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Если электрод RES некомфортен для пациента, не используйте его при начальных сеансах

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020

97

Sección 2ª,
DOY FE.

РИНОПЛАСТИКА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Улучшает биостимуляцию:			· Увеличивает микроциркуляцию,				
· Клеточное питание.			· Расширяет сосуды тканей и кровотока.			· Оксигенирует клетки и ткани.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Увеличивает клеточный метаболизм				
						· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
						· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его публично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОДТЯЖКА ЛИЦА (20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противоотечное, обезболивающее лечение для ускорения процесса заживления.

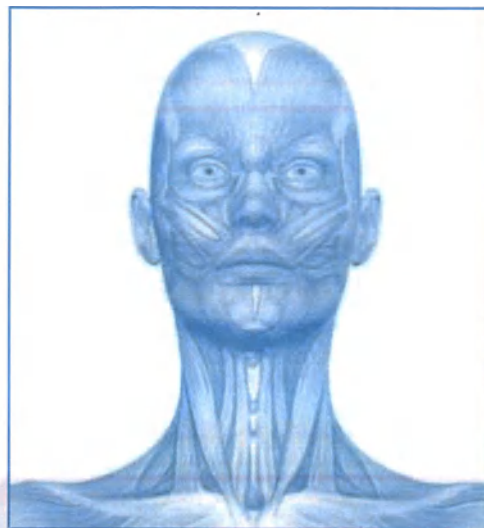

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 15 мин IAS* 1

RES 5 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очень медленные и плавные движения

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Итого: 6 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Начинать лечение следует через три дня после операции, ограничив применение на подбородке, шее, лице и веках.

После провести обычные процедуры по уходу за кожей лица

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020

97

Sección 2ª,
DOYFE

ПОДТЯЖКА ЛИЦА



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, адаптировать или передавать его публично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

АБДОМИНОПЛАСТИКА / ЛИПЭКТОМИЯ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Обезболивающее и реабсорбционное лечение гематом и ускорение процесса заживления.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 12 мин IAS* 2

RES 12 мин IAS* 3

CAP 6 мин IAS* 1

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дренажный массаж. Очень медленные и плавные движения

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Итого: 10 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Проверять тепловые ощущения на участке, который не подвергался операции, лечение рубца проводить в соответствии с существующим протоколом.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

2020

Sección 2ª,
DOY FE

АБДОМИНОПЛАСТИКА / ЛИПЭКТОМИЯ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ				Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ			
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:				Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:			
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.				· Увеличивает клеточный метаболизм.			
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.				· Детоксикация тканей, выведение токсинов.			
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.				· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.			
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОДТЯЖКА КОЖИ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

2020 . DOY FE


Sección 2ª

Handwritten signature

ОБЛАСТЬ ЛИЦА (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Лечение dryблости кожи, улучшение выражения лица и эластичности, уменьшение морщин и лицевых борозд и улучшение овала лица

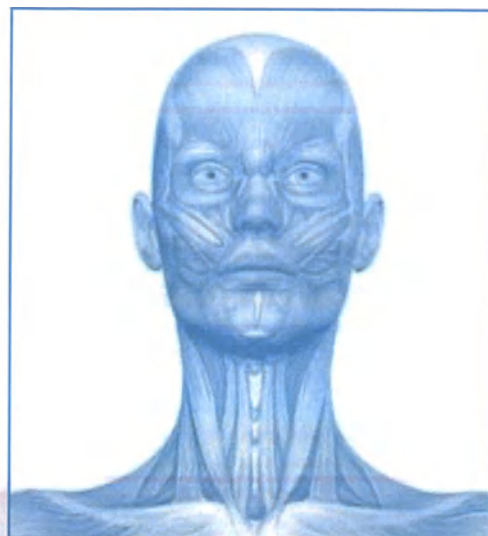

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 14 мин IAS* 7

RES 10 мин IAS* 6

RES 6 мин IAS* 5

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнять круговые движения в направлении мышц и мышечных тяж. На заключительном этапе (резистивном режиме) применять методы «ремоделирования тканей».

СЕАНСЫ

Два-три раза в неделю

Итого: 6 сеансов

Поддерживающая терапия: **раз в месяц**

ПРИМЕЧАНИЯ

В случаях купероза использовать электрод CAP IAS 1 вместо электрода RES

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.

Indiba

ОБЛАСТЬ ЛИЦА



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его публично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ШЕЯ И ЛИНИЯ ШЕИ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура повышения эластичности и упругости кожи. Регенерация эпидермиса и улучшение васкуляризации.

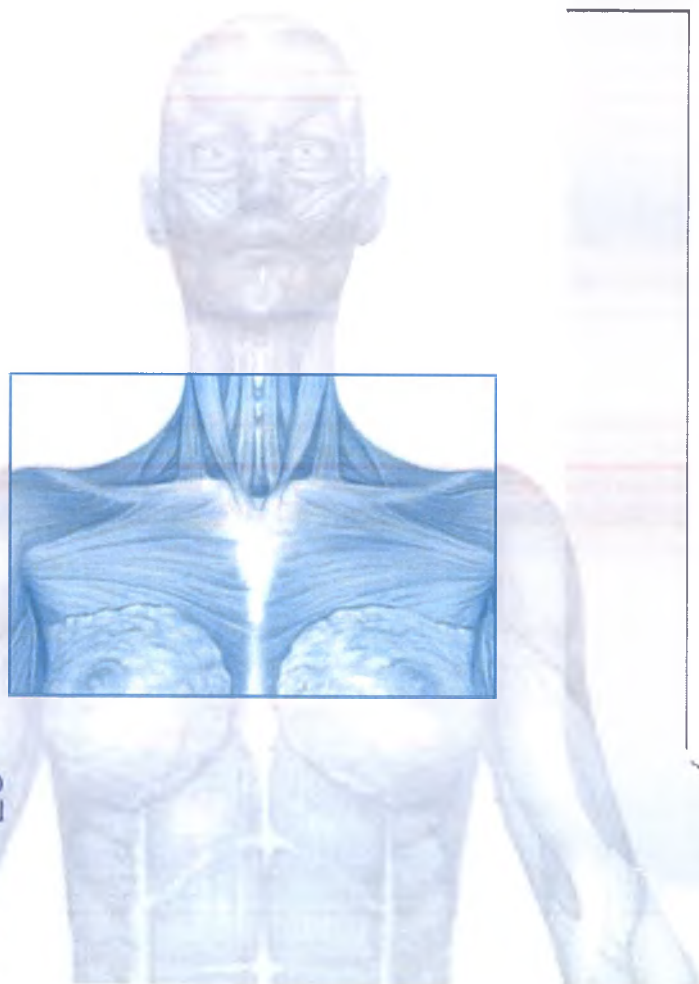

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 12 мин IAS* 7

RES 12 мин IAS* 7

RES 6 мин IAS* 5

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнять круговые движения в направлении мышц и мышечных тяж. На заключительном этапе (резистивном режиме) применять методы «ремоделирования тканей».

СЕАНСЫ

Два-три раза в неделю

Итого: 6 сеансов

Поддерживающая терапия: **раз в месяц**

ПРИМЕЧАНИЯ

В случаях купероза использовать электрод CAP IAS 1 вместо электрода RES.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

На causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

ШЕЯ И ЛИНИЯ ШЕИ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

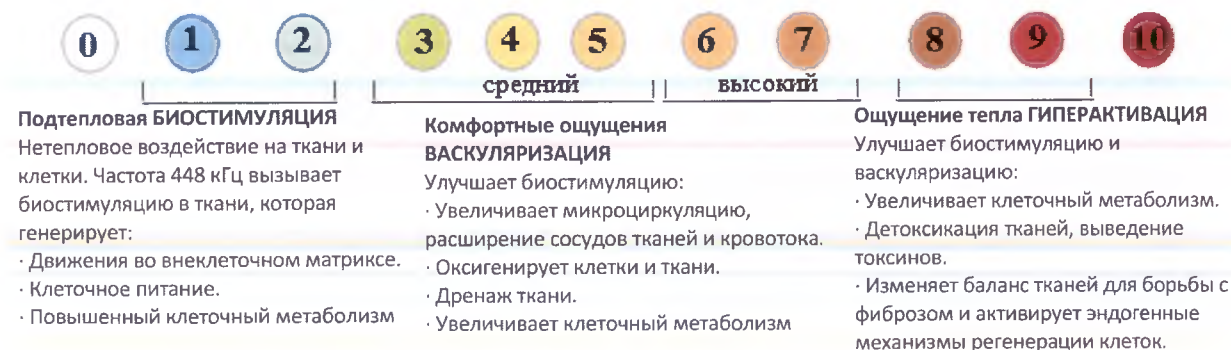

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, в том числе и в электронной форме, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в свет в электронной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ГРУДЬ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Лечение с целью подъема, улучшения, подтяжки зоны декольте и уменьшения фиброза.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 8 мин IAS* 7

RES 5 мин IAS* 7

CAP 2 мин IAS* 2

КАЖДАЯ ГРУДЬ

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнять круговые движения в направлении мышц и мышечных тяж. На заключительном этапе (резистивном режиме) применять методы «ремоделирования тканей».

СЕАНСЫ

Дважды в неделю

Всего: 6 сеансов

Поддерживающая терапия: раз в месяц

ПРИМЕЧАНИЯ

Если необходимо применение косметических средств, их следует наносить после процедуры

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Sección 2ª

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

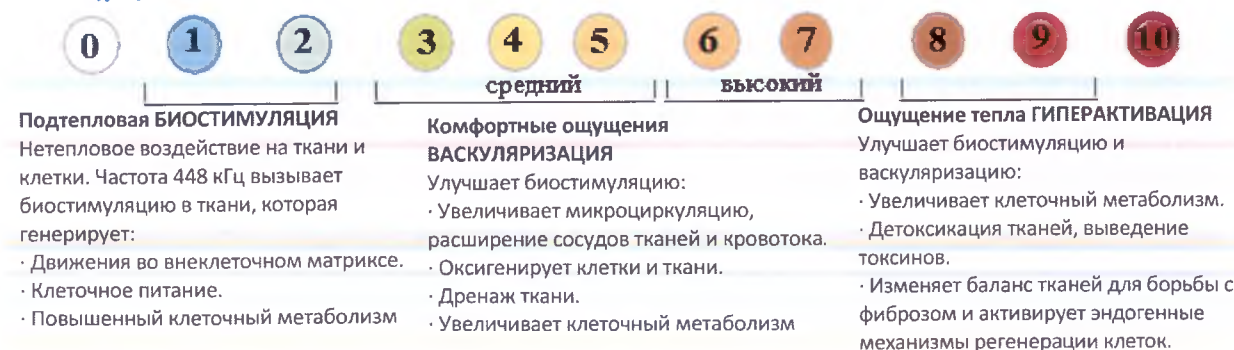

РУКИ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура для осветления кожи, уменьшения жира, придания формы контуру рук и дренажа.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

CAP 6 мин IAS* 7

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

RES 6 мин IAS* 7

RES 3 мин IAS* 2

(фиксируется на ладони)

каждая рука

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые движения с акцентом на зонах с большим количеством жировых отложений

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Итого: 6 сеансов

Поддерживающая терапия: раз в месяц

ПРИМЕЧАНИЯ

Если необходимо применение косметических средств, их следует наносить после процедуры.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.
Sección 2ª

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

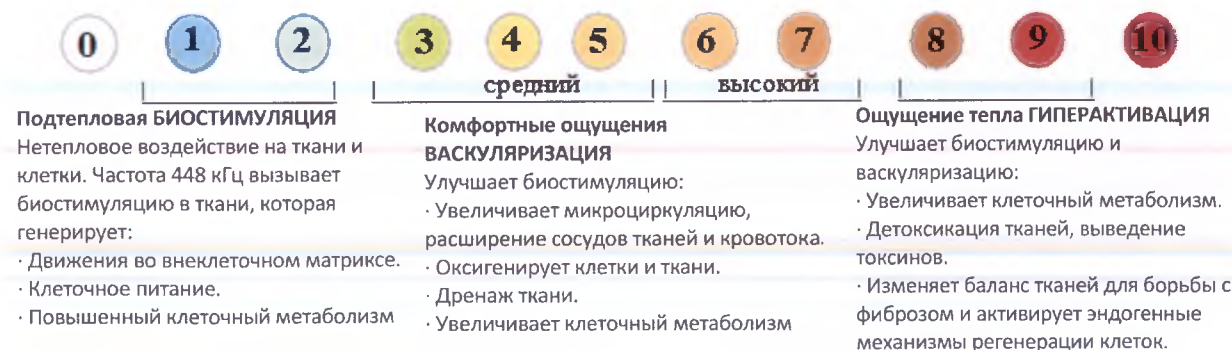

ЖИВОТ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура для уменьшения накопленного жира, укрепления и повышения эластичности кожи.

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод между лопаток.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 16 мин IAS* 8

RES 10 мин IAS* 8

RES 4 мин IAS* 2

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые движения в зонах преимущественного скопления жировых отложений. На заключительном этапе (резистивном режиме) выполнить лимфодренажный массаж области живота.

СЕАНСЫ

Два-три раза в неделю


Итого: **12 сеансов**

Поддерживающая терапия: **раз в месяц**

ПРИМЕЧАНИЯ

Если необходимо применение косметических средств, их следует наносить после процедуры.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

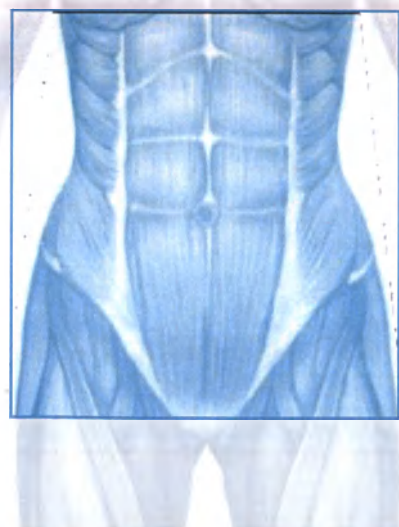

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.


Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

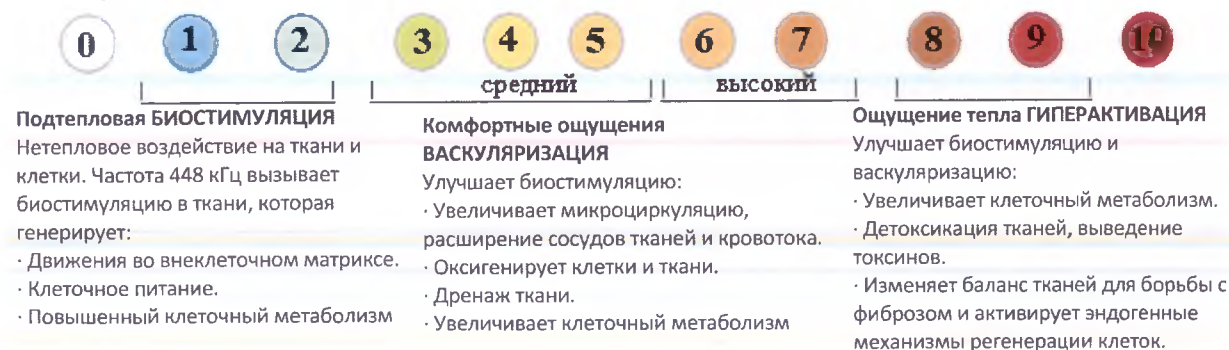

ЯГОДИЦЫ (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура для улучшения мышечного и сосудистого тонуса, укрепления кожи, уменьшения локализованного жира, улучшения контура, поднятия ягодиц, лечения эластоза и обвисания.

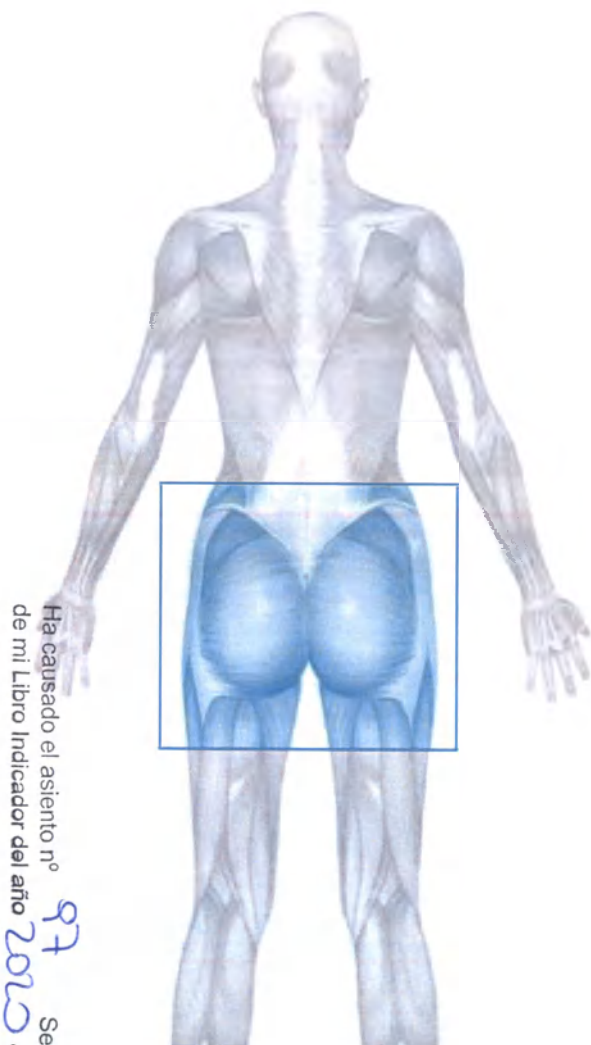

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на животе. Возвратный плоский электрод на области живота

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 5 мин IAS* 8 | КАЖДАЯ ЯГОДИЦА

RES 8 мин IAS* 8 | КАЖДАЯ ЯГОДИЦА

RES 4 мин IAS* 2 | КРЕСТЕЦ

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые движения с акцентом на зонах скопления жировых отложений. На заключительном этапе (резистивном режиме) перейти в область крестцового отдела.

СЕАНСЫ

Два-три раза в неделю

Итого: 12 сеансов

Поддерживающая терапия: **раз в месяц**

ПРИМЕЧАНИЯ

Если необходимо применение косметических средств, их следует наносить после процедуры.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA. S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA. S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ЦЕЛЛЮЛИТ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª
DOY FE.

[Signature]

ЦЕЛЛЮЛИТ

Первая часть – лежа на спине (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура для улучшения венозного кровообращения, улучшения микроциркуляции, уменьшения отеков и повышения эластичности кожи



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине: возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовой области

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 2 мин IAS* 6 | ЖИВОТ
CAP 6 мин IAS* 8
RES 3 мин IAS* 8 | КАЖДАЯ НОГА
CAP 2 мин IAS* 2
(внутренняя подкожная вена)

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые движения с акцентом на зонах скопления жировых отложений. С четвертого сеанса изменить время режимов CAP и RES, учитывая тип целлюлита.

СЕАНСЫ

Два раза в неделю
Всего: 15-20 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

В случае отеочного целлюлита, применять IAS 4 локально в области ног

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020

97

Sección 2ª
DOY FE

ЦЕЛЛЮЛИТ

Первая часть – лежа на спине

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FRIGONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Anticellulite
Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

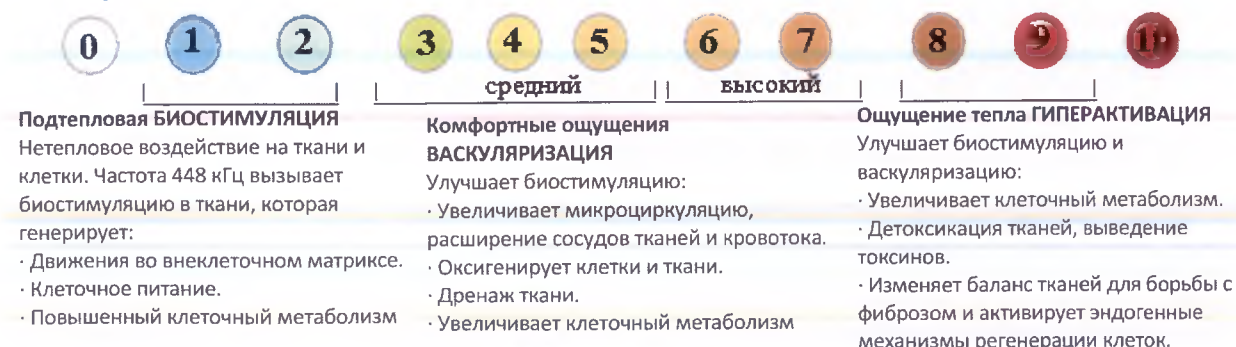

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законными владельцами соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается его воспроизводить или передавать его публично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ЦЕЛЛЮЛИТ

Вторая часть – лежа на животе (24 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура для улучшения венозного кровообращения, улучшения микроциркуляции, уменьшения отеков и повышения эластичности кожи



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на животе: возвратный плоский электрод на области живота

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 4 мин IAS* 8

CAP 4 мин IAS* 8

RES 3 мин IAS* 2

CAP 2 мин IAS* 4

КАЖДАЯ НОГА/ЯГОДИЦА

КРЕСТЕЦ

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые движения с акцентом на зонах скопления жировых отложений. С четвертого сеанса изменить время режимов CAP и RES, учитывая тип целлюлита.

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: 15-20 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

В случае отеочного целлюлита, применять IAS 4 локально в области ног

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE.

ЦЕЛЛЮЛИТ

Вторая часть – лежа на животе

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Anticellulite
Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

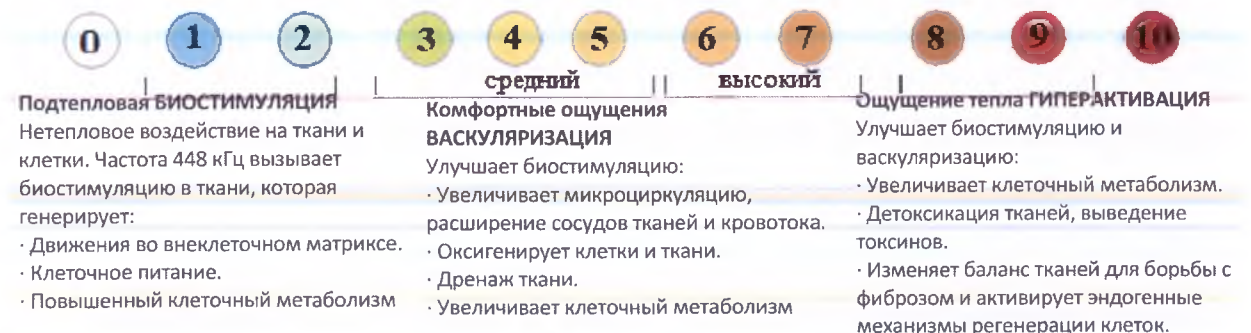

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª,
DOY FE

acdr

МАССАЖНАЯ НАСАДКА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Массажная насадка - это дополнительное изделие для электрода RES диаметром 65 мм, которое добавляет механический эффект к электрическим и тепловым эффектам. Благодаря этому импульсы проникают более глубоко при проведении процедуры.



СОВМЕСТИМЫЙ ЭЛЕКТРОД

Электрод RES диаметром 65 мм

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

- Улучшение дренажа
- Уменьшение жировых отложений
- Смягчение фиброзной ткани
- Более глубокий массаж без боли

ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

- Перед операцией (тело и конечности)
- После операции (пост липосакция, часть 2, профилактика и фиброзные ткани)
- Процедуры по подтяжке кожи (живот и конечности)
- Лечение целлюлита
- Антивозрастная процедура для спины

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые движения с акцентом на зонах скопления жировых отложений и на фиброзных тканях.

ДРУГИЕ КОММЕНТАРИИ

Следует использовать после емкостного режима, чтобы подготовить ткань.

ОЧИСТКА

- Промыть мыльной водой
- Хорошо высушить


Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª
DOY FE.

МАССАЖНАЯ НАСАДКА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

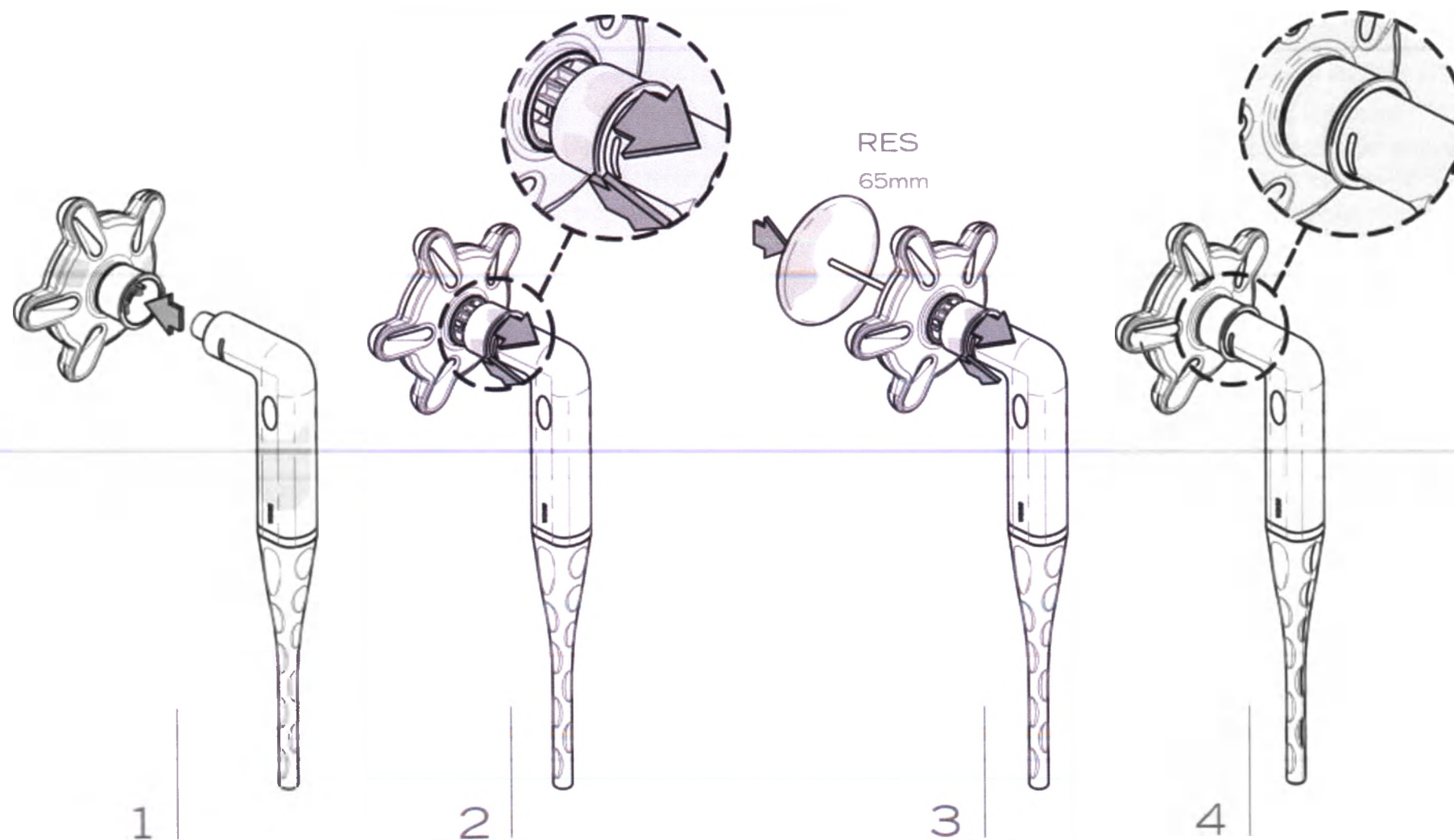


СПИНА

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА (45 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура повторного определения контуров, способствующая потере жира и дренажу.

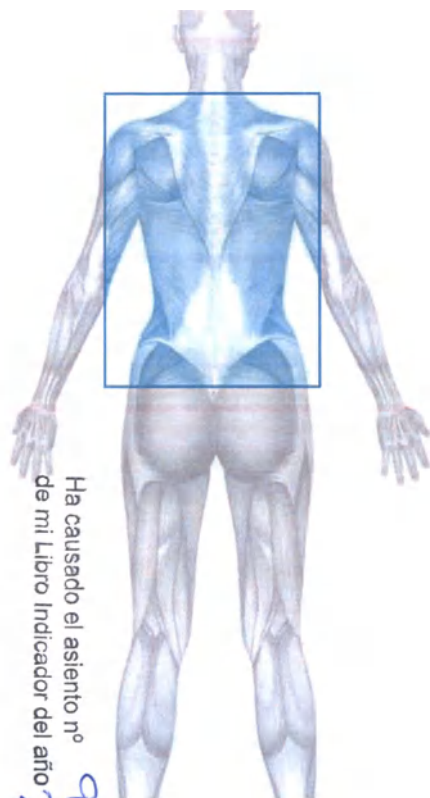

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на животе. Возвратный плоский электрод на области живота

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 24 мин IAS* 8

RES 16 мин IAS* 8

RES 5 мин IAS* 8 на позвоночник

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Линейные, круговые движения и по дренажным линиям

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Итого: 12 сеансов

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется делать упражнения для осанки и укрепления мышц

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

СПИНА АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

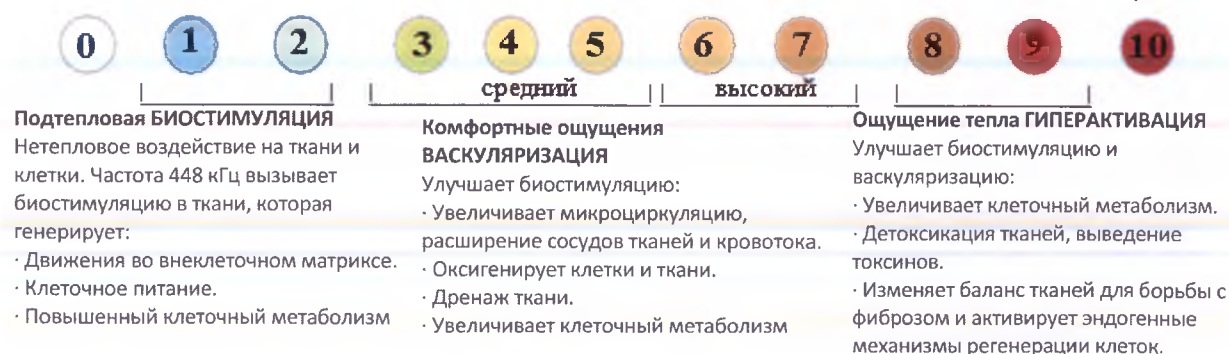

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно или за плату без предварительного согласия INDIBA, S.A., выданного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН (40 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Улучшение венозного кровообращения, микроциркуляции, контроль боли и дренажа.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине, возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовой области

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 7 мин IAS* 5 (лежа на спине и животе)

RES 2,5 мин IAS* 5 (лежа на спине животе, фиксируется на подошве)

RES 1 мин IAS* 3 (фиксируется на подошве стопы)

КАЖДАЯ
НОГА

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Круговые и линейные движения в краниальном направлении

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Итого: **12 сеансов**

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется использовать косметические средства от сосудистых заболеваний. Особенно показано для людей, имеющих стоячую работу.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª
DOY FE

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

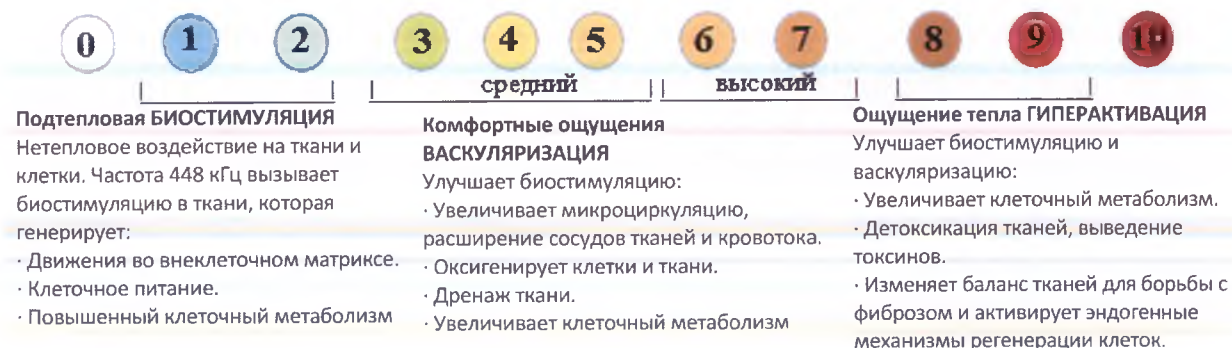

ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК (30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Улучшение васкуляризации, контроль боли и дренаж.



ПОЛОЖЕНИЕ

Возвратный плоский электрод в межлопаточной или поясничной области в положении лежа на спине (в зависимости от зоны воздействия)

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 15 мин IAS* 7

RES 15 мин IAS* 7

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Локальное применение в области, требующей лечения

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Итого: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Повторить процедуру через полтора месяца с использованием следующих этапов:

CAP 7 мин

RES 23 мин

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Sección 2ª

ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется проводить данную процедуру после целенаправленной терапии или в качестве сопутствующей терапии для улучшения конечного результата. Эффективно в сочетании с упражнениями и соответствующей диетой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Улучшает биостимуляцию:			· Увеличивает микроциркуляцию,			· Увеличивает клеточный метаболизм.	
· Клеточное питание.			· Расширение сосудов тканей и кровотока.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.	
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещено его копировать, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A. Любые нарушения будут преследоваться по закону.



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE

Sección 2ª

Handwritten signature



КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ


INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ НАЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ PDO (полидиоксанон), PCL (поликапролактон) И PLL (полилактик) (ЛИЦО И ШЕЯ 30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Подготовка ткани для лечения, увеличение кровотока и оксигенации, способствующее более высокому терапевтическому эффекту из-за усиления клеточного метаболизма при установке имплантата из нитей. Кроме того, врач будет ощущать меньшее сопротивление, во время размещения нитей, и риск возникновения гематом уменьшится

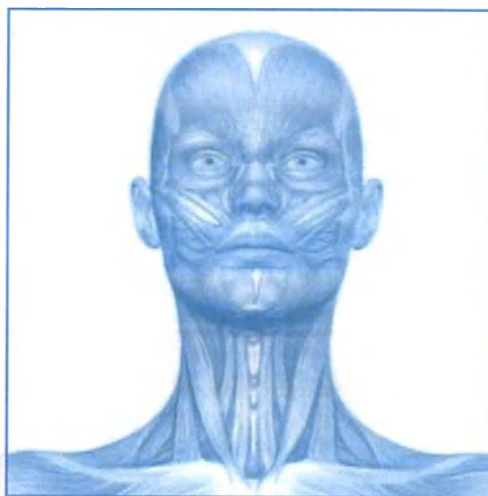

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 20 - 30 мин IAS* 6 - 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнять движения по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

3 сеанса. За 30 - 15 и за 1 день до проведения имплантации нитей

Всего: **3 сеанса**

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

За 30 дней до имплантации нитей

ПРИМЕЧАНИЯ

Процедура может проводиться однократно или в качестве вспомогательной терапии к любому другому лечению, определенному врачом, например, светоизлучающим диодам (светодиодам)

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ НАЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ PDO (полидиоксанон), PCL (поликапролактон) И PLL (полилактик)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Установку нитей рекомендуется проводить через 24 часа после процедуры, чтобы устранить тепловой эффект.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

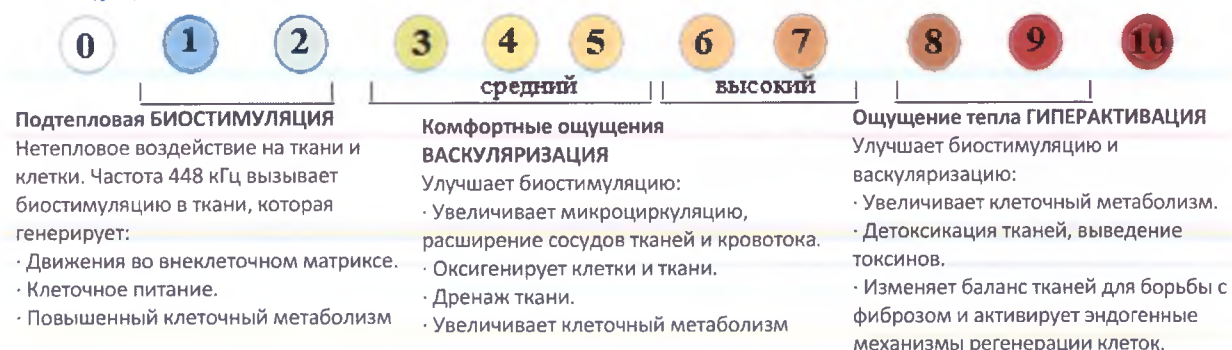


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выданного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ НАЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ PDO (полидиоксанон), PCL (поликапролактон) И PLL (полилактик) (ЛИЦО И ШЕЯ 20-30 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Усиление неоколлагенеза, вызванного размещением самой нити, и способствование формированию физиологических реакций.
Улучшение результатов.

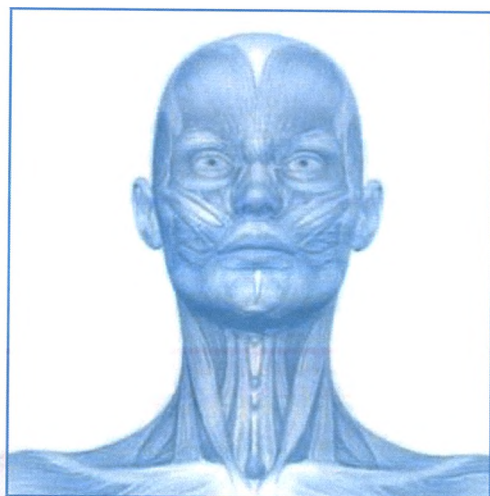

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 6 – 8

RES 10-20 мин IAS* 6 – 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнять движения по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 4-6 сеансов

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

30-45 дней после размещения нитей

ПРИМЕЧАНИЯ

Если необходимо, можно провести субтермическую процедуру (IAS 1 с модуляцией сигнала) сразу после размещения нитей, чтобы ограничить побочные эффекты операции на подкожном уровне, но без снижения эффективности лечения. Этот протокол будет заключаться в проведении от 1 до 3 сеансов с интервалом 24 часа между сеансами в соответствии с потребностями пациента.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ НАЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ PDO (полидиоксанон), PCL (поликапролактон) И PLL (полилактик)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется подождать 30 - 45 дней после размещения нитей.

Для достижения долгосрочного терапевтического эффекта рекомендуется назначать один курс лечения каждые 2 или 3 месяца.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается копировать, воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, полностью или частично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ЛИЦО 15 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Немедленное уплотнение ткани, улучшение недиспергирования продукта, вызванного дряблостью кожи пациента, и, следовательно, увеличение объема обрабатываемой области при меньшем количестве продукта.

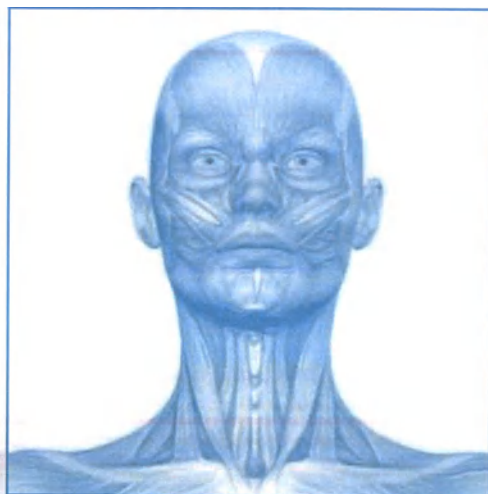

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 6 – 8

RES 5 мин IAS* 6 – 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, **RES** 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Процедуру проводить по всему лицу, делая акцент на областях, в которые планируется вводить гиалуроновую кислоту

СЕАНСЫ

Два или три раза в неделю

Всего: 2 или 4 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1-2 недели до введения

ПРИМЕЧАНИЯ

Если это необходимо, можно провести химический пилинг в качестве дополнительной обработки за 24/48 часа до процедуры.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clínica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97 Sección 2ª
2020 - DOY FE

Handwritten signature

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пейте не менее 1,5 литра воды в день, поддерживая здоровый образ жизни.

Учитывайте возможное снижение терапевтической эффективности данной процедуры у пациентов с заболеваниями коллагена или пациентов, принимающих высокие дозы кортикостероидов.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

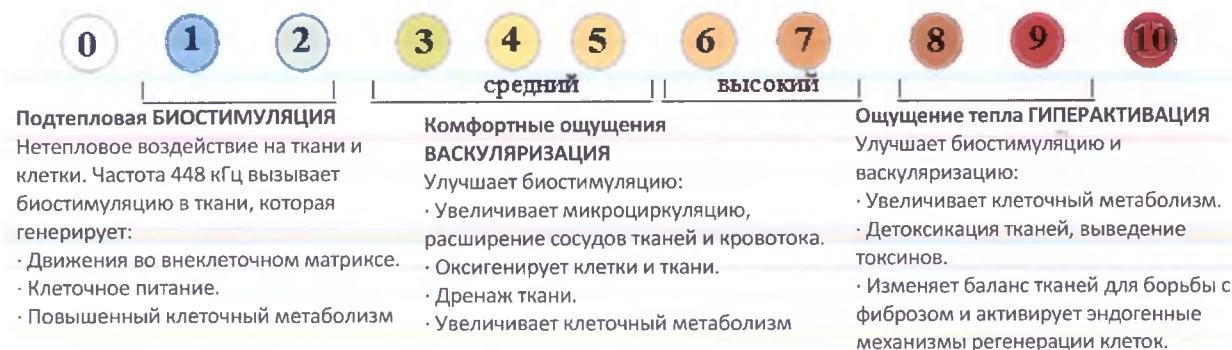

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается воспроизводить, копировать, распространять или передавать его полностью или частично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ЛИЦО 15 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Усиление биологического воздействия гиалуроновой кислоты на обработанную ткань (неоколлагенез, неоваскуляризация и т.д.). Кроме того, также возможно уменьшить побочные эффекты лечения (ушибы, иммобилизация, отек ...).



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 3 – 5

RES 5 мин IAS* 3 – 5

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, **RES** 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Один-два раза в неделю

Всего: 2 или 4 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15 дней после введения

ПРИМЕЧАНИЯ

В случае появления синяков рекомендуется немедленно начать лечение, оставляя не менее 8 часов между сеансами в зависимости от потребностей пациента. Выполнять круговые движения по синякам с помощью электрода CAP 5 - 7 минут с IAS 1 - 2 с модуляцией сигнала.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Через 15 дней после окончания мезотерапии можно проводить процедуру в качестве вспомогательного средства (IAS 3 - 5) против старения.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Улучшает биостимуляцию:			· Увеличивает микроциркуляцию,			· Увеличивает клеточный метаболизм.	
· Клеточное питание.			· Расширение сосудов тканей и кровотока.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.	
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его, платно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в печатной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ, ПОЛИКАПРОЛАКТОНА ИЛИ ПОЛИЛАКТИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ (ЛИЦО 20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Обеспечение оптимального состояния ткани до инфильтрации, в результате немедленного уплотнения тканей и увеличения клеточного метаболизма.

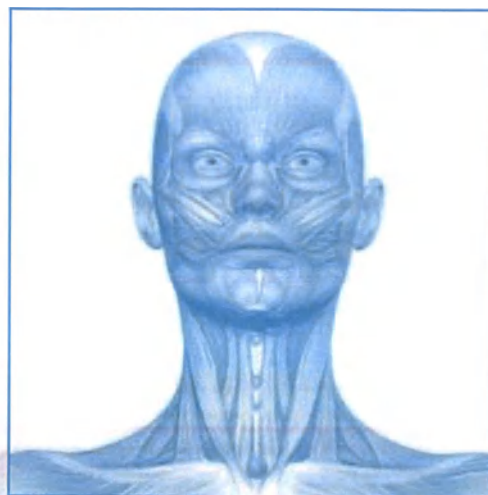

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 15 мин IAS* 6 – 8

RES 5 мин IAS* 6 – 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Процедуру проводить по всему лицу, делая акцент на областях, в которые планируется вводить указанные вещества

СЕАНСЫ

Два раза в неделю

Всего: 4 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15 дней до введения

ПРИМЕЧАНИЯ

Процедура может проводиться однократно или в качестве вспомогательной терапии к любому другому лечению, определенному врачом, например, светоизлучающим диодам (светодиодам)

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clínica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª

2020. DOY FEA

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ, ПОЛИКАПРОЛАКТОНА ИЛИ ПОЛИЛАКТИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Введение филлеров или других указанных веществ рекомендуется через 24 часа после процедуры, чтобы устранить тепловой эффект.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

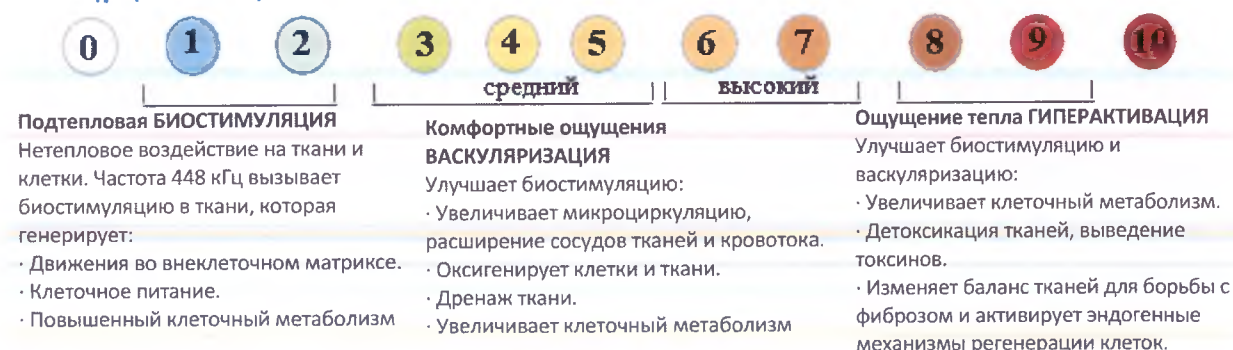


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, воспроизводить или передавать его, платно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ, ПОЛИКАПРОЛАКТОНА ИЛИ ПОЛИЛАКТИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ (ЛИЦО 20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Усиление неоколлагенеза, вызванного размещением филлеров и усиление генерации физиологических реакций. Улучшение результатов.

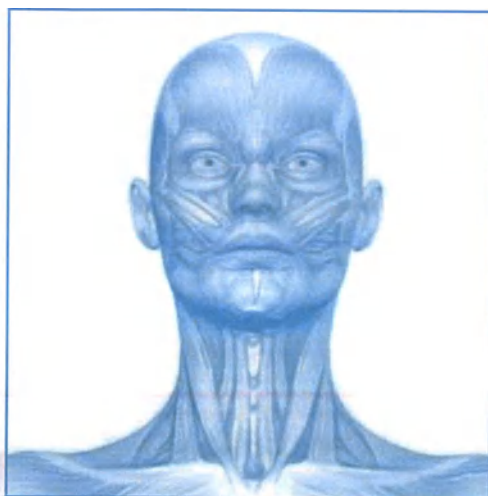

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 6 – 8

RES 10 мин IAS* 6 – 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: от 4 до 6 сеансов

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15-30 дней после введения

ПРИМЕЧАНИЯ

Если это необходимо, можно провести субтермическую процедуру (IAS 1 с модуляцией сигнала) сразу после введения филлеров, чтобы ограничить побочные эффекты от введения, без снижения эффективности процедуры. Этот протокол будет заключаться в проведении от 1 до 3 сеансов с интервалом в 24 часа между сеансами в соответствии с потребностями пациента.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª.
DOY FE

Handwritten signature

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ, ПОЛИКАПРОЛАКТОНА ИЛИ ПОЛИЛАКТИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется подождать 30 дней после введения филлеров, чтобы начать проведение процедуры.

Для достижения долгосрочного терапевтического эффекта рекомендуется назначать один курс лечения каждые 1 или 2 месяца.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

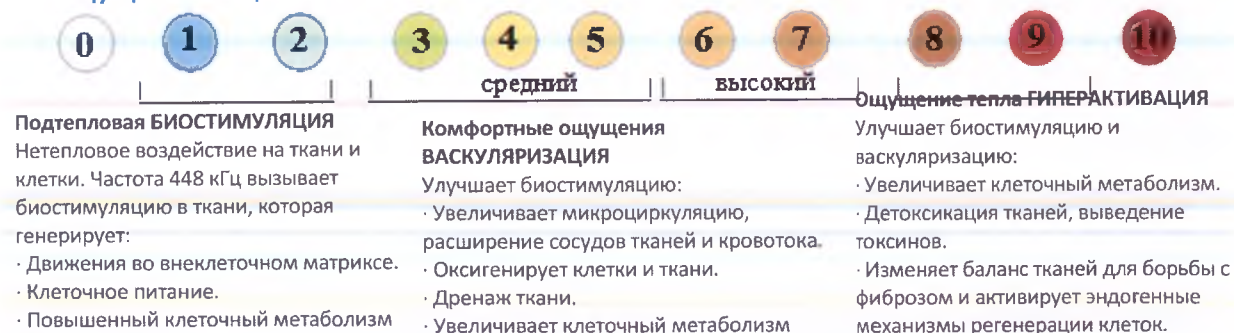


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законными владельцами соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается воспроизводить или передавать его полностью, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПЕРЕД МЕЗОТЕРАПИЕЙ ВИТАМИНАМИ, ПЕПТИДАМИ, НЕРЕТИКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ПЛАЗМОТЕРАПИЕЙ ЛИЦО И ШЕЯ (20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Обеспечение оптимального состояния ткани перед процедурой, усиление соответствующего внутрикожного распределения и ассимиляции инфильтрованных продуктов из-за увеличения проницаемости клеточной мембраны, вызванной процедурой. Поэтому риск появления гематом вследствие инфильтрации будет снижен.

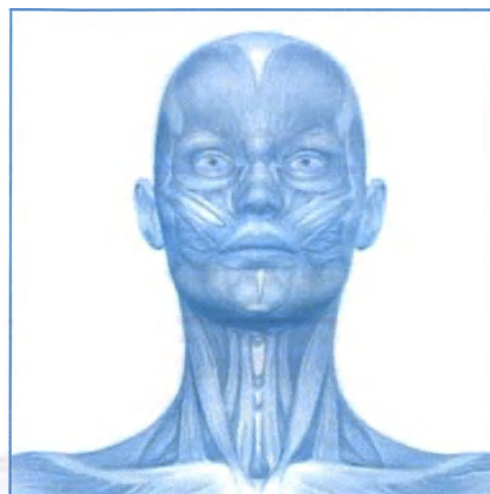

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 6 – 8

RES 10 мин IAS* 6 – 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, **RES** 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Введение через 8 часов после процедуры, чтобы избежать создаваемого теплового эффекта

СЕАНСЫ

2-3 раза в неделю

Всего: **2-4 сеанса**

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1-2 недели до введения

ПРИМЕЧАНИЯ

Если это необходимо, можно провести химический пилинг в качестве дополнительной обработки за 24/48 часа до процедуры.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª

2012 . DOY FE

ПЕРЕД МЕЗОТЕРАПИЕЙ ВИТАМИНАМИ, ПЕПТИДАМИ, НЕРЕТИКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ПЛАЗМОТЕРАПИЕЙ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROGNIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддерживайте здоровый образ жизни.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

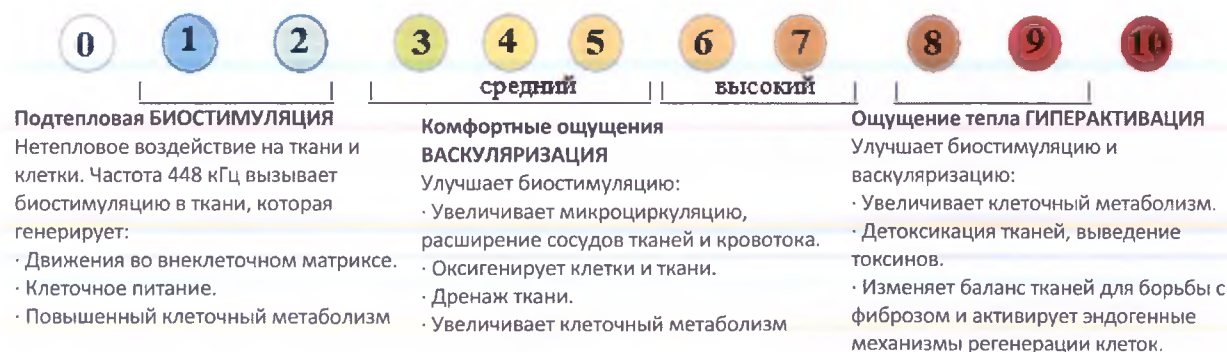


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается воспроизводить, копировать, распространять или передавать его полностью или частично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ ВИТАМИНАМИ, ПЕПТИДАМИ, НЕРЕТИКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ПЛАЗМОТЕРАПИИ ЛИЦО И ШЕЯ (20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Усиление биологических эффектов мезотерапии на обрабатываемой ткани (неоколлагенез, неоваскуляризация и т.д.). Кроме того, также возможно уменьшить побочные эффекты лечения (ушибы, иммобилизация, отек ...).

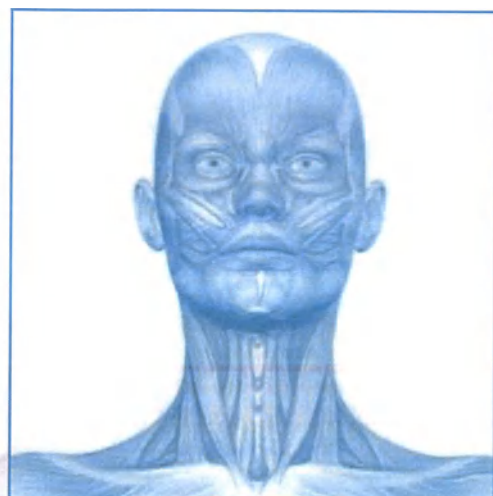

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 3 – 5

RES 10 мин IAS* 3 – 5

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

1-2 раза в неделю

Всего: 2-4 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15-30 дней после введения

ПРИМЕЧАНИЯ

В случае появления синяков рекомендуется немедленно прекратить процедуру, оставляя не менее 8 часов между сеансами в зависимости от потребностей пациента. Выполнять круговые движения в области синяков в режиме CAP 5 - 7 мин с IAS 1 - 2 с модуляцией сигнала.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asento nº
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.

97

Sección 2ª

DOY FE

ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ ВИТАМИНАМИ, ПЕПТИДАМИ, НЕРЕТИКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ПЛАЗМОТЕРАПИИ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

По прошествии 1 месяца после мезотерапии можно применять процедуры INDIBA в качестве вспомогательного средства (IAS 3 - 5) против старения.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается копировать или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его без согласия INDIBA, S.A., выпущенного в печатной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ БОТУЛИНОТОКСИНА ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

ЛИЦО (20 мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Дополнительная процедура для улучшения состояния тканей. Способствует дермоэпидермальной регенерации после мышечного расслабления, вызванного терапевтическим эффектом ботулинического токсина при мимических морщинах. Улучшение результатов.

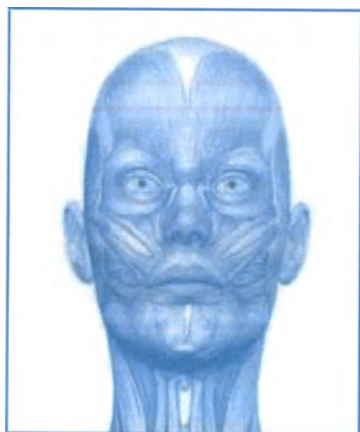

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 10 мин IAS* 6 – 8

RES 10 мин IAS* 6 – 8

ЭЛЕКТРОД CAP: 30 - 40 мм, RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение движений по линии дренажа и в направлении мускулатуры

СЕАНСЫ

1 раз в неделю

Всего: 4-6 сеансов

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15 дней после введения

ПРИМЕЧАНИЯ

При необходимости за 24-48 часов до проведения процедуры можно сделать химический пилинг.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FEE

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ БОТУЛИНОТОКСИНА ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ведите здоровый образ жизни.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

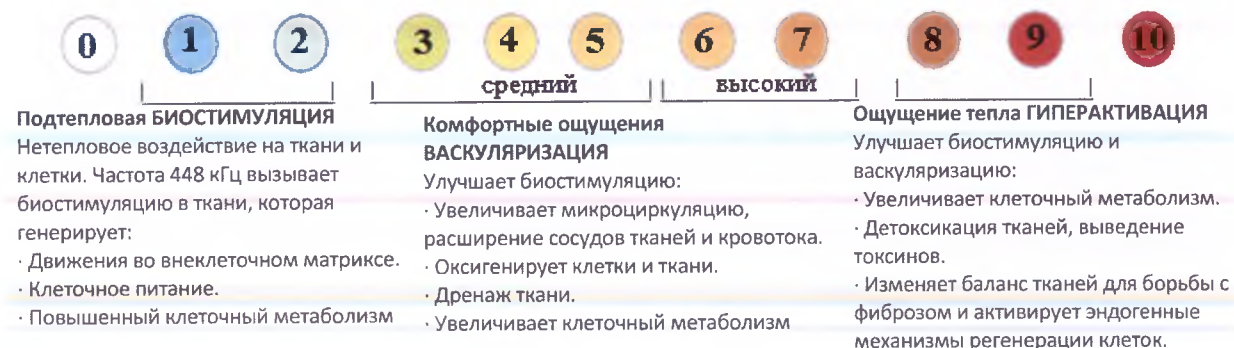


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫХ НЕАБЛЯЦИОННЫМ ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ И ФРАКЦИОННОЙ АБЛЯЦИОННОЙ РАДИОЧАСТОТОЙ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ЛИЦО (20 мин)

Контроль воспалительного и отеочного процесса, не уменьшая при этом его полезных эффектов, ускорение выздоровления пациента, улучшение результатов и уменьшение риска побочных эффектов (поствоспалительная гиперпигментация ...).

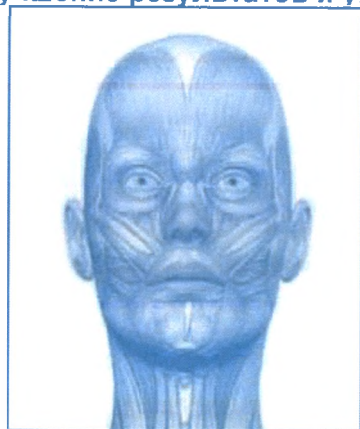

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAR 20 мин IAS* 1 с модуляцией сигнала
ЭЛЕКТРОД RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение линейных движений без смещения ткани под стерильной гидрогелевой повязкой и обязательно нанесение крема электропроводящего под электрод для скольжения

СЕАНСЫ

1 раз в неделю
Всего: 4-6 сеансов

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

15 дней после введения

ПРИМЕЧАНИЯ

При необходимости за 24-48 часов до проведения процедуры можно сделать химический пилинг.

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clínica Laser Elite, г. Мадрид, Испания
* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE
97 Sección 2ª
2020

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫХ НЕАБЛЯЦИОННЫМ ФРАКЦИОННЫМ ЛАЗЕРОМ И ФРАКЦИОННОЙ АБЛЯЦИОННОЙ РАДИОЧАСТОТОЙ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

По прошествии 1 месяца после лечения можно применять процедуры INDIBA в качестве вспомогательного средства (IAS 3 - 5) против старения.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

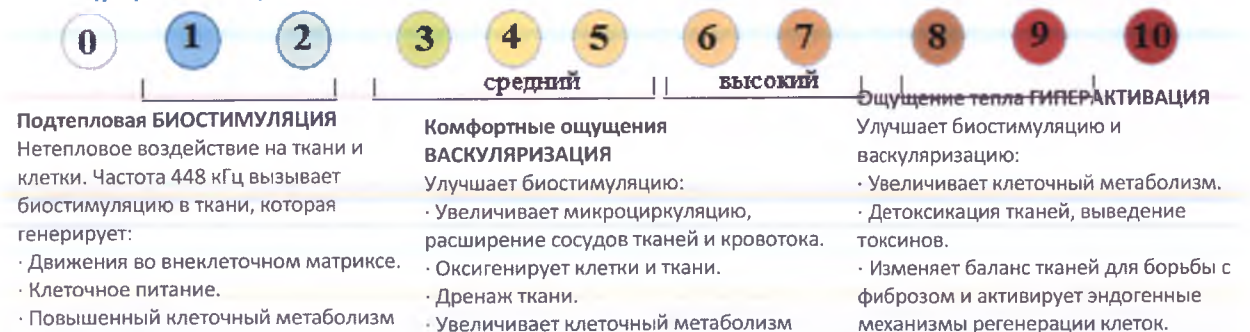

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законными владельцами соответствующего оборудования. Любое использование,复制或 без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в публичной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫХ ИФЛ И ВАСКУЛЯРНЫМ ЛАЗЕРОМ (PDL, KTP, Nd: YAG и т.д.)

ЛИЦО (20 мин)

Контроль воспалительного и отеочного процесса, не уменьшая при этом его полезных эффектов, ускорение выздоровления пациента, улучшение результатов и уменьшение риска побочных эффектов (поствоспалительная гиперпигментация ...).



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 20 мин IAS* 1 с модуляцией сигнала

RES 10 мин IAS* 1 с модуляцией сигнала

ЭЛЕКТРОД CAP 30-40 мм, RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнение линейных или круговых движений без скольжения по ткани

СЕАНСЫ

2-3 раза в неделю

Всего: 1-3 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

24 часа после воздействия

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется проводить немедленное лечение после лазерного воздействия, оставляя, по крайней мере, 8 часов между сеансами в соответствии с потребностями пациента

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª

2020 . DOY FE

000 ЦИРМИ

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫХ ИФЛ И ВАСКУЛЯРНЫМ ЛАЗЕРОМ (PDL, КТР, Nd: YAG и т.д.)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

По прошествии 1 месяца после лечения можно применять процедуры INDIBA в качестве вспомогательного средства (IAS 3 - 5) против старения.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.


КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

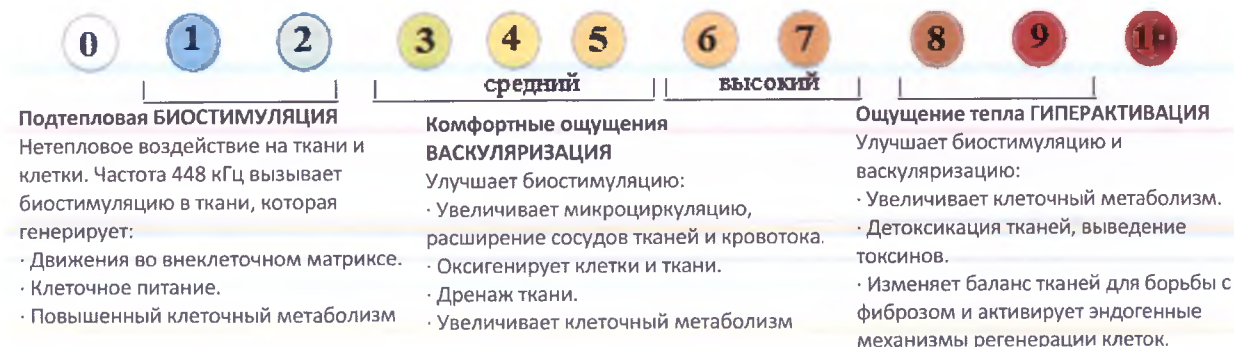


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается воспроизводить, копировать, распространять или передавать его полностью или частично, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПЕРЕД МЕЗОТЕРАПИЕЙ И ЛАЗЕРНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ (ДЕПИГМЕНТАЦИЯ, НЕАБЛЯЦИОННАЯ И Т.Д.) В ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИНФРАОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (10 мин)

Облегчение дренажа области, которая будет инфильтрирована, чтобы избежать появления синяков и отека век.

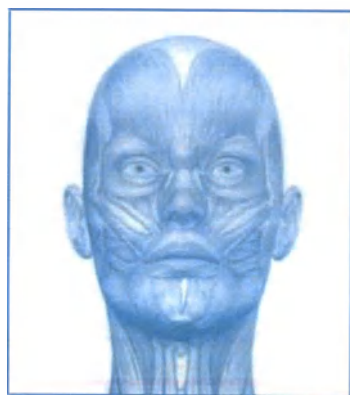

ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

САР 10 мин IAS* 4-6 с модуляцией сигнала

ЭЛЕКТРОД САР 30 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Локальное воздействие

СЕАНСЫ

1-2 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

24-48 часов до воздействия

ПРИМЕЧАНИЯ

Если необходимо, можно провести субтермальную последующую процедуру (IAS 1 с модуляцией сигнала) сразу же после лечения, если возникла гематома.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOX FE

ПЕРЕД МЕЗОТЕРАПИЕЙ И ЛАЗЕРНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ (ДЕПИГМЕНТАЦИЯ, НЕАБЛЯЦИОННАЯ И Т.Д.) В ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пейте не менее 1,5 л воды в день,
поддерживая здоровый образ жизни.

Учитывайте возможное снижение
эффективности процедуры у пациентов с
заболеваниями коллагена или у пациентов,
принимающих высокие дозы
кортикостероидов.

Проверьте отсутствие в прошлом
гиперчувствительности к ингредиентам
крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при
наличии кардиостимулятора или других
электронных имплантатов, у беременных
женщин, в случае ран на коже (открытые
раны или недавние ожоги), тромбофлебита
и отсутствии чувствительности. Не
противопоказано при наличии зубных
имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным
требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов,
сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства.
Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий
контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не
вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно
увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и
плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является
комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия,
рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время
проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной
терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект
поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит
наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения			Ощущение тепла		ГИПЕРАКТИВАЦИЯ		
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ					Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:		
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Улучшает биостимуляцию:			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.		· Увеличивает клеточный метаболизм.		
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Дренаж ткани.		· Детоксикация тканей, выведение токсинов.		
· Повышенный клеточный метаболизм			· Увеличивает клеточный метаболизм					· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.		

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно или за плату без предварительного согласия INDIBA, S.A., выданного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ДО КАПИЛЛЯРНОГО УПЛОТНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МЕЗОТЕРАПИЯ, КАРБОКСИТЕРАПИЯ, ТОП, ФОТОМОЛОЖЕНИЕ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ЛОБНО-ТЕМЕННАЯ И ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ (15 мин.)

Немедленное уплотнение ткани, усиливающее недиспергирование продукта.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 15 мин IAS* 6-8

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Область лобной и теменной кости с акцентом на области проведения процедуры. Выполнять линейные движения

СЕАНСЫ

2-3 раза в неделю
Итого: 2-4 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1-2 недели до воздействия

ПРИМЕЧАНИЯ

При необходимости за 24-48 часов до проведения процедуры можно сделать химический пилинг.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

97

Sección 2ª

ДО КАПИЛЛЯРНОГО УПЛОТНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МЕЗОТЕРАПИЯ, КАРБОКСИТЕРАПИЯ, ТОП, ФОТОМОЛОЖЕНИЕ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream
/Лосьон для волос INDIBA (не входит в
комплект поставки)

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пейте не менее 1,5 л воды в день,
поддерживая здоровый образ жизни.

Учитывайте возможное снижение
эффективности процедуры у пациентов с
заболеваниями коллагена или у пациентов,
принимающих высокие дозы
кортикостероидов.

Проверьте отсутствие в прошлом
гиперчувствительности к ингредиентам
крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при
наличии кардиостимулятора или других
электронных имплантатов, у беременных
женщин, в случае ран на коже (открытые
раны или недавние ожоги), тромбоза и
отсутствии чувствительности. Не
противопоказано при наличии зубных
имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным
требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов,
сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства.
Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий
контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не
вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно
увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и
плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является
комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия,
рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время
проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной
терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект
поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит
наилучший результат процедуры.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж тканей.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается
использовать, воспроизводить или передавать его полностью, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., в любой форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ КАПИЛЛЯРНОГО УПЛОТНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МЕЗОТЕРАПИЯ, КАРБОКСИТЕРАПИЯ, ТОП, ФОТОМОЛОЖЕНИЕ...)

ЛОБНО-ТЕМЕННАЯ И ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ (15 мин.)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Контроль воспалительных и отечных процессов, без уменьшения полезных эффектов.



ПОЛОЖЕНИЕ

Лежа на спине. Возвратный плоский электрод на межлопаточной области (обеспечить хороший контакт с тканью)¹

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAR 15 мин IAS* 1 с модуляцией сигнала

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполнять линейные движения

СЕАНСЫ

1-3 раза в неделю

Итого: 1-3 сеанса

НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

72 часа после воздействия

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется начинать протокол через 72 часа после лечения, оставляя, по крайней мере, 8 часов между сеансами в соответствии с потребностями пациента

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

ДО КАПИЛЛЯРНОГО УПЛОТНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МЕЗОТЕРАПИЯ, КАРБОКСИТЕРАПИЯ, ТОП, ФОТООМОЛОЖЕНИЕ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream
/Лосьон для волос INDIBA (не входит в комплект поставки)

РЕКОМЕНДАЦИИ

По прошествии 1 месяца после лечения можно применять процедуры INDIBA в качестве вспомогательного средства (IAS 3 - 5) против старения.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** для оптимизации передачи энергии пациенту при использовании изделия, рекомендуется, чтобы пользователь держался за рукоятку для электрода во время проведения процедуры. В случае необходимости использования методов мануальной терапии, представители INDIBA рекомендуют использовать перчатки (не входят в комплект поставки). Это, несомненно, оптимизирует передачу энергии пациенту и обеспечит наилучший результат процедуры.


Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ					Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ		
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:					Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:		
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.					· Увеличивает клеточный метаболизм.		
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.					· Детоксикация тканей, выведение токсинов.		
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.					· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.		
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, представлять или передавать его бесплатно или без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

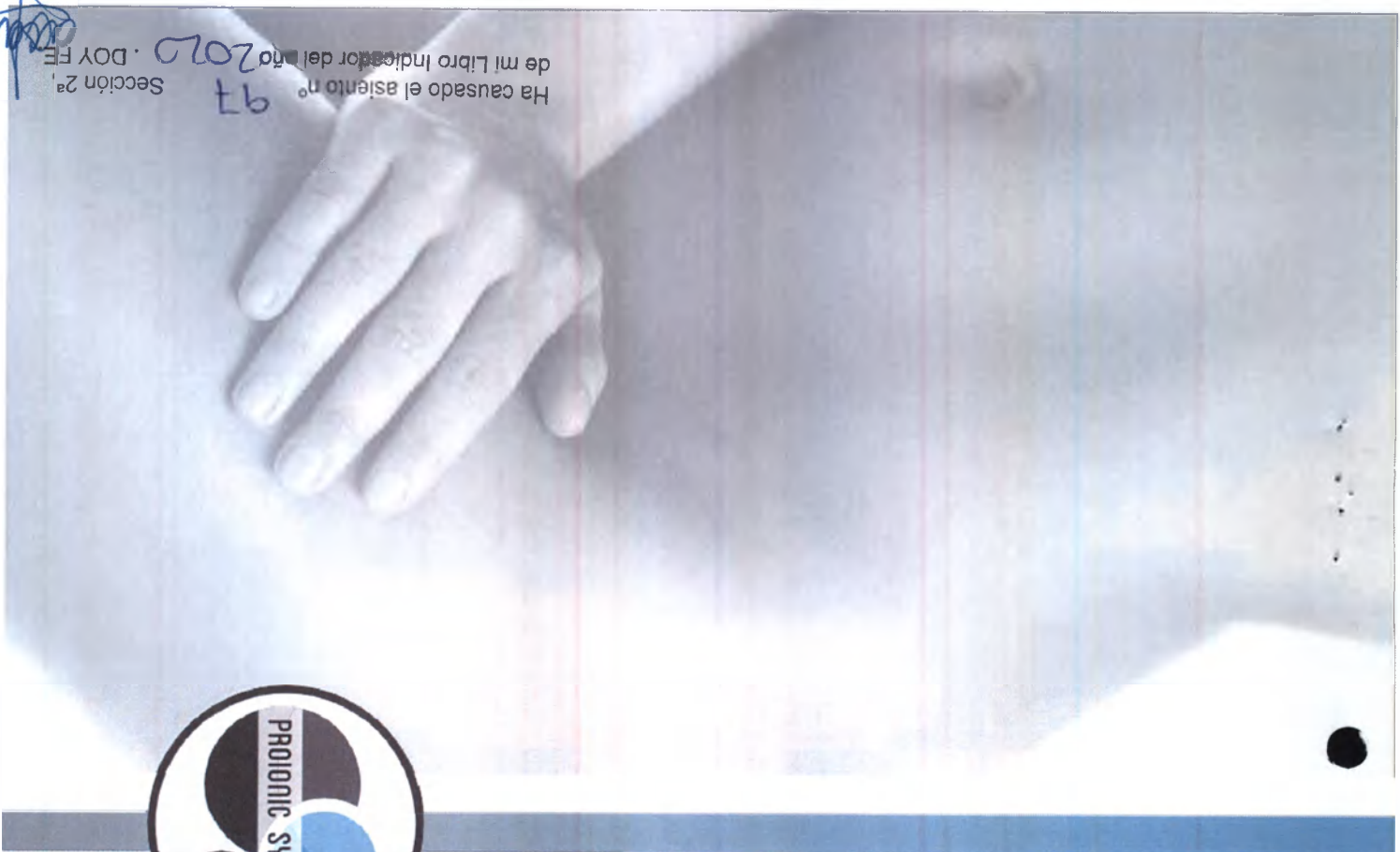

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

ГЕНИТАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (20 мин.)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Укрепление, повышение гидратации, закрытие влагалища, уплотнение коллагена

ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 30-40 мм: 5 мин IAS* 8 с каждой стороны

RES 35 мм: 5 мин IAS* 8 с каждой стороны

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполняйте круговые или линейные движения в зависимости от анатомии пациента.

Сначала обработайте одну половину входа во влагалище, а затем – другую. Температура должна быть около 40 - 42 ° C.

СЕАНСЫ

1 раз в месяц

Итого: 3 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глутаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора.

Продезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clinica BMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª.
DOY FE
[Signature]

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует: · Движения во внеклеточном матриксе. · Клеточное питание. · Повышенный клеточный метаболизм			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ Улучшает биостимуляцию: · Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока. · Оксигенирует клетки и ткани. · Дренаж ткани. · Увеличивает клеточный метаболизм			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию: · Увеличивает клеточный метаболизм. · Детоксикация тканей, выведение токсинов. · Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НА ГЕНИТАЛИЯХ (20 мин)

Подготовка ткани до операции, повышение кровоснабжения и оксигенации.

ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 30-40 мм: 5 мин IAS* 6-7 с каждой стороны

RES 35 мм: 5 мин IAS* 6-7 с каждой стороны

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполняйте круговые или линейные движения в зависимости от анатомии пациента.

Сначала обработайте одну половину входа во влагалище, а затем – другую.

СЕАНСЫ

Всего: 1 или 2 сеанса

Последний сеанс должен быть выполнен за 24-48 часов до операции.

ПРИМЕЧАНИЯ


Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глютаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора.

Продезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica VMUM, г. Мадрид, Испания

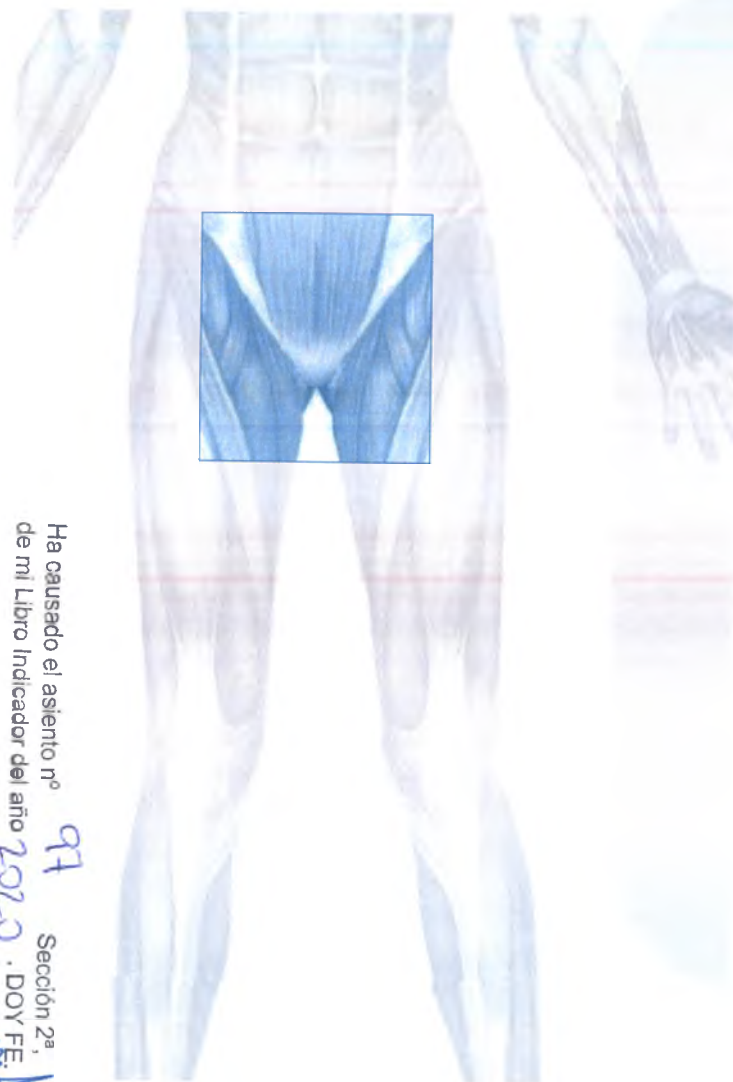

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOYFE.

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НА ГЕНИТАЛИЯХ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)



Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:

- Движения во внеклеточном матриксе.
- Клеточное питание.
- Повышенный клеточный метаболизм

Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ
Улучшает биостимуляцию:

- Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.
- Оксигенирует клетки и ткани.
- Дренаж тканей.
- Увеличивает клеточный метаболизм

Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ
Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:

- Увеличивает клеточный метаболизм.
- Детоксикация тканей, выведение токсинов.
- Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБИОПЛАСТИКИ

ОСТРАЯ 1 ФАЗА (20мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Ускорение заживления ран, профилактика спаек и фиброза, укрепление тканей и улучшение гидратации.

ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 30-40 мм: 4 мин IAS* 5 с каждой стороны

RES 35 мм: 4 мин IAS* 5 с каждой стороны

CAP 40 мм: 2 мин IAS* 1 с каждой стороны

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполняйте круговые или линейные движения в зависимости от анатомии пациента. Выполнять процедуру только после того, как исчезнет воспалительный процесс. Этот протокол можно продолжить вместе с протоколом генитального омоложения. Если необходимо, можно сочетать данный протокол с другими.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глутаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора.

Продезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica BMUM, г. Мадрид, Испания



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Sección 2ª

[Signature]

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБИОПЛАСТИКИ ОСТРАЯ 1 ФАЗА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ			Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ				
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:			Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:				
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.			· Увеличивает клеточный метаболизм.				
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.			· Детоксикация тканей, выведение токсинов.				
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.			· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.				
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПОСЛЕПРОВЕДЕНИЯ ЛАБИОПЛАСТИКИ ПОДОСТРАЯ 2 ФАЗА (20мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Ускорение заживления ран, профилактика спаек и фиброза, укрепление тканей и улучшение гидратации.

ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

CAP 30-40 мм: 4 мин IAS* 5 с каждой стороны

RES 35 мм: 4 мин IAS* 5 с каждой стороны

CAP 40 мм: 2 мин IAS* 1 с каждой стороны

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выполняйте круговые или линейные движения в зависимости от анатомии пациента. Выполнять процедуру только после того, как исчезнет воспалительный процесс. Этот протокол можно продолжить вместе с протоколом генитального омоложения. Если необходимо, можно сочетать данный протокол с другими.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глутаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора.

Продезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clinica BMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE
Sección 2ª
2020

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБИОПЛАСТИКИ ПОДОСТРАЯ 2 ФАЗА

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

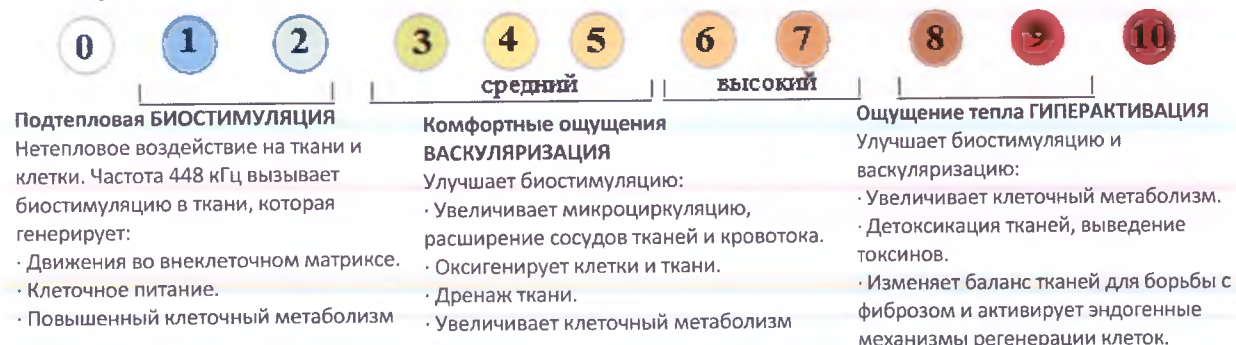


Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выданного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ВНУТРИПОЛОСТНОЕ ГЕНИТАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

(20мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Снижение дряблости тканей, улучшение гидратации и устранение сухости, омоложение эпителиальной ткани и слизистой оболочки влагалища. Уменьшение атрофии влагалища из-за предменструального синдрома. Улучшение местного трофизма эстрогена. Повышение эластичности и упругости влагалища. Активация неоколлагенеза. Стимуляция сократительной способности и утолщение стенок влагалища.

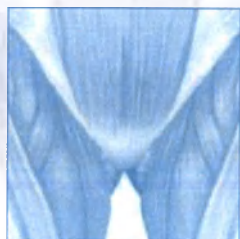

ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

Внешнее применение: CAP 30-40 мм: 2 мин IAS*8 с каждой стороны

RES 35 мм: 2 мин IAS* 8 с каждой стороны

Внутреннее применение: Электрод CAP продольный: 12 мин IAS* 7

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внешнее применение: Выполняйте круговые или линейные движения в зависимости от анатомии пациента. Поддерживайте достаточное давление, чтобы обеспечить идеальный контакт между кожей и всей поверхностью электрода.

Внутреннее применение: Используйте 1-минутный интервал с давлением на боковые стороны влагалища (верхнюю, правую, левую, нижнюю): всего 3 цикла по 4 минуты (по 1 минуте с каждой стороны) для завершения процедуры. Электрод должен полностью контактировать со стенкой влагалища. Перед началом процедуры электрод должен быть полностью погружен во влагалище. Перед извлечением электрода обязательно остановите процедуру.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 4 сеанса

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глутаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Проздезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica BMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2010. DOY FE.

Sección 2ª

[Signature]

ВНУТРИПОЛОСТНОЕ ГЕНИТАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбоза и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:

- Движения во внеклеточном матриксе.
- Клеточное питание.
- Повышенный клеточный метаболизм

Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ
Улучшает биостимуляцию:

- Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.
- Оксигенирует клетки и ткани.
- Дренаж тканей.
- Увеличивает клеточный метаболизм

Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ
Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:


- Увеличивает клеточный метаболизм.
- Детоксикация тканей, выведение токсинов.
- Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выданного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ (20мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Активация фибробластов, неоангиогенез и ремоделирование влагалища. Укрепление соединительнотканного матрикса влагалища и связанных мочеполовых структур. Стимуляция кровообращения венозного сплетения, участвующего в механизме закрытия уретры.

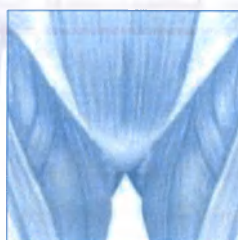

ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

Внутреннее применение: Электрод RES продольный: 20 мин IAS* 6-7

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Электрод должен полностью контактировать со стенкой влагалища. Перед началом процедуры электрод должен быть полностью погружен во влагалище. Перед извлечением электрода обязательно остановите процедуру.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 8 сеансов

Также рекомендуется применять другие специфичные методы лечения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глутаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора.

Продезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica BMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2012. Sección 2ª,
DOY FE.

[Signature]

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Подтепловая БИОСТИМУЛЯЦИЯ			Комфортные ощущения ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ					Ощущение тепла ГИПЕРАКТИВАЦИЯ		
Нетепловое воздействие на ткани и клетки. Частота 448 кГц вызывает биостимуляцию в ткани, которая генерирует:			Улучшает биостимуляцию:					Улучшает биостимуляцию и васкуляризацию:		
· Движения во внеклеточном матриксе.			· Увеличивает микроциркуляцию, расширение сосудов тканей и кровотока.					· Увеличивает клеточный метаболизм.		
· Клеточное питание.			· Оксигенирует клетки и ткани.					· Детоксикация тканей, выведение токсинов.		
· Повышенный клеточный метаболизм			· Дренаж ткани.					· Изменяет баланс тканей для борьбы с фиброзом и активирует эндогенные механизмы регенерации клеток.		
			· Увеличивает клеточный метаболизм							

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ПРОТОКОЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА (НЕ В ОСТРОЙ ФАЗЕ) (20мин)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PIONIC SYSTEM

Ускорение процесса заживления. Лечение фиброза. Уменьшение боли. Восстановление эластичности влагалища. Активация неокollaгеноза. Стимуляция сократительной способности и активация местного неокollaгеноза. Улучшение эластичности тканей.



ПОЛОЖЕНИЕ

Литотомическое положение. Возвратный плоский электрод на пояснично-крестцовом отделе

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕДУРЫ

Внешнее применение: CAP 30-40 мм: 5 мин IAS* 6-7

Внутреннее применение: электрод RES продольный: 15 мин IAS* 6

В случае, если внутреннее применение невозможно, использовать электрод RES 35 мм

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внешнее применение: Выполняйте круговые или линейные движения в зависимости от анатомии пациента. Поддерживайте достаточное давление, чтобы обеспечить идеальный контакт между кожей и всей поверхностью электрода.

Внутреннее применение: Электрод должен полностью контактировать со стенкой влагалища. Перед началом процедуры электрод должен быть полностью погружен во влагалище. Перед извлечением электрода обязательно остановите процедуру.

СЕАНСЫ

Один раз в неделю

Всего: 8 сеансов

Также рекомендуется применять другие специфичные методы лечения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрод RES, электрод RES продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Затем примените средство дезинфекции, которое предназначено для профессионального использования (фенол или глутаральдегид 2%) в течение 30 мин, а затем смойте водой.

Электрод CAP, электрод CAP продольный: только для индивидуального использования. Дважды очистите электрод с помощью мыльного раствора. Проздезинфицируйте рукоятки для электродов и возвратные электроды с помощью средств, используемых в лечебном учреждении. При возникновении любых сомнений обратитесь к производителю.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª.
DOY FE.
2021

ПРОТОКОЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА (НЕ В ОСТРОЙ ФАЗЕ)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы рекомендуем проводить данную процедуру после более целенаправленной терапии или в качестве сопутствующего лечения для улучшения конечного результата. Лечение должно сопровождаться упражнениями и здоровой диетой.

КОММЕНТАРИИ

Предлагаемые протоколы являются общими и должны быть адаптированы к индивидуальным требованиям или обстоятельствам пациента, учитывая возраст, дисбаланс гормонов, сопутствующие условия, образ жизни, качество жизни и историю хирургического вмешательства. Все эти факторы могут повлиять на конечный результат. Только для наружного применения.


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1. Положение:** удерживать электрод ровно на поверхности тела; не наклонять.
- 2. Давление:** поддерживать достаточное давление, чтобы обеспечить соответствующий контакт между кожей и поверхностью электрода. Давление должно быть стабильным и не вызывать дискомфорт у пациента.
- 3. Скорость:** перемещать электрод круговыми движениями, каждый раз медленно увеличивая диаметр круга. Движения должны быть медленными (один круг в секунду) и плавными.
- 4. Температура:** убедиться, что температура подходит для пациента и является комфортной.
- 5. Гигиена:** представители INDIBA рекомендуют использовать нитриловые или латексные одноразовые перчатки (не входят в комплект поставки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует проводить процедуру при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантатов, у беременных женщин, в случае ран на коже (открытые раны или недавние ожоги), тромбофлебита и отсутствии чувствительности. Не противопоказано при наличии зубных имплантов.

Ощущения пациента в зависимости от значения IAS (IAS=аналоговая шкала INDIBA)

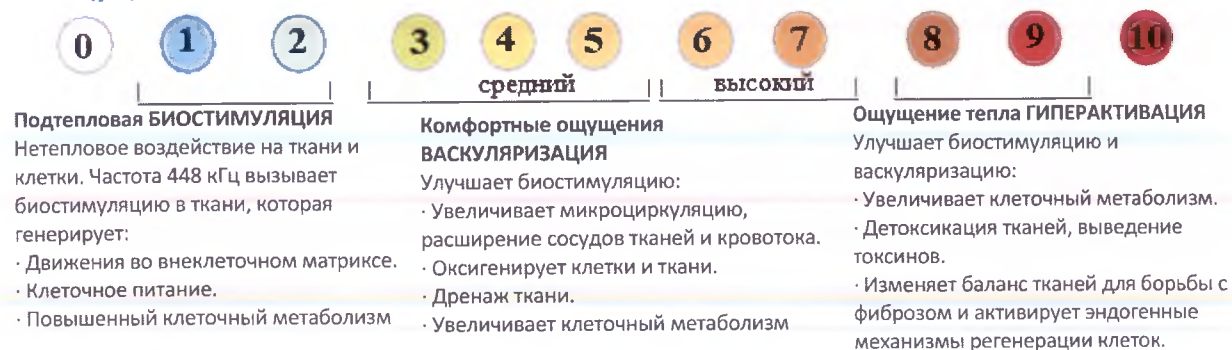

Настоящий протокол, который принадлежит исключительно "INDIBA, S.A.", защищен законодательством об интеллектуальной собственности и может использоваться только законным владельцем соответствующего оборудования. Следовательно, запрещается полностью или частично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., вытиснутого в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.



APPROVED BY

Technical Director &
Management Representative

Carlos Janer

27/01/ 2020

**The device is a radiofrequency hyperthermic
device, in options:**

Radiofrequency hyperthermic device

ELITE NS

Radiofrequency hyperthermic device

RGN

Manual

Version 1.0 dated 01.01.2020

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

2020

Sección 2ª,
, DOY FE

Content

05	INTRODUCTION
05	- The radio-frequency hyperthermic device in versions
06	- Contact Information
06	- Appointment
07	- Operating principle
07	- Resistive mode (RES)
07	- Capacitive mode (CAP)
08	- Continuous modulation
09	KEY WARNINGS
11	INDICATIONS
11	CONTRAINDICATIONS
11	SIDE EFFECTS
12	PRODUCT DESCRIPTION
12	- Appearance of the product
26	- Product design
31	- Appointment of product elements
32	- Product controls
33	PRODUCT OPERATION
33	- Initial installation of the device
34	- Turning on
34	- shutdown
35	INTERFACE NAVIGATION
36	- Time Based Procedures
37	- Capacitive Time Based Procedures (CAP)
38	- Procedures based on time counting in resistive mode (RES)
39	- Procedures based on the amount of energy transferred
40	- Capacitive-based procedure (CAP) based on the amount of energy transferred
41	- Resistive mode (RES) based on the amount of energy transferred
42	- Use of procedures
42	- Saved procedures
43	—Creation of procedures
47	—Manage management
48	—Changing folders and programs
48	—Removing folders and programs
48	—Moving programs
49	—Copying programs
49	—Loading stored procedures

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª
de mi Libro Indicador del año 2020, DOY FE.

50	INDIBA PREPARED PROCEDURES
51	SETTINGS MENU
52	MONITORING PROGRAM
52	HEATING A PLANE RETURN ELECTRODE
53	PRODUCT USE INFORMATION
54	ICONS
55	- Remote Control
56	PRODUCT ELEMENTS
56	- Types of electrodes
56	- Return electrodes
57	- Handle for CAP electrodes
57	- Handle for RES electrodes
59	- Manual
61	- Placing the active electrode and return electrode on the patient's body
62	- Guide to the use of active electrodes
62	- Capacitive electrodes (CAP)
63	- Resistive electrodes (RES)
65	- Cable Connection Guide
66	INDIBA ELECTRIC CONDUCTING CREAMS
67	PRODUCT CLEANING AND DISINFECTION
67	- Cleaning the device
67	- Cleaning and disinfection of active electrodes, return electrodes and electrode handles
67	- When carrying out gynecological procedures
68	REPAIR AND MAINTENANCE
69	MARKING AND PACKAGING
69	- marking
79	- Packing
86	TECHNICAL DETAILS
86	- Product classification
86	- Compliance with the standards of the Russian Federation
87	- Transportation, storage, operation
88	- Weight and overall characteristics
90	- Specifications
93	- Disposal
94	GUARANTEES
95	- Serial number
96	TROUBLESHOOTING AND TROUBLESHOOTING
98	- Error messages
99	GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS
	EMC Information
	Appendix 1 Monitoring Program
	Annex 2 Protocols of Procedures

Introduction

HYPERTHERMAL RADIO FREQUENCY APPARATUS IN PERFORMANCE OPTIONS:

The device is radio frequency hyperthermic

In versions:

1. The device radio-frequency hyperthermic ELITE NS, as a part:

- The main unit of the device ELITE NS – 1 unit;
- Column – 1 unit;
- Shielded mains cable – 1 unit;
- Connection cable – 1 unit;
- Key – 6 unit;
- RES curved handle with cable (if required) – 1 unit;
- CAP curved handle with cable (if required) – 1 unit;
- CAP straight handle with cable (if required) – 1 unit;
- Remote control unit – (if required) – 1 unit;
- Cylindrical neutral electrode (if required) – 1 unit;
- Cable for cylindrical neutral electrode (if required) – 1 unit;
- Return plate (if required) – 1 unit;
- RES electrode 35 mm (if required) – 1 unit;
- RES electrode 50 mm (if required) – 1 unit;
- RES electrode 65 mm (if required) – 1 unit;
- RES electrode 90 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 30 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 40 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 55 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 65 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 80 mm (if required) – 1 unit;
- Manual – 1 unit;
- IDC NS letter download MS – 1 unit;

2. Welcome Pack, in composition:

- Proionic Anticellulite Cream – 1 unit;
- Proionic Face Cream – 1 unit;
- Proionic Care Cream – 2 units;
- Massager Electrode 65mm – 2 unit;
- USB – 1 unit;
- Bag for electrodes – 1 unit;

3. PACK GINECO-AESTHETICS, in composition:

- RES Longitudinal electrode (if required) – 1 unit;
- CAP Longitudinal electrode (if required) – 1 unit;
- RES electrode 35 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 30 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 40 mm (if required) – 1 unit;

Apparatus radio-frequency hyperthermic RGN, consisting of:

1. Radiofrequency hyperthermia device RGN, in composition:

- The main unit of the device RGN – 1 unit;
- Shielded mains cable – 1 unit;
- RES curved handle with cable (if required) – 1 unit;
- CAP curved handle with cable (if required) – 1 unit;
- Remote control unit (if required) – 1 unit;
- Return plate (if required) – 1 unit;
- RES electrode 35 mm (if required) – 1 unit;
- RES electrode 50 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 30 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 40 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 55 mm (if required) – 1 unit;
- Manual – 1 unit;
- IDC NS letter download MS – 1 unit;

2. Welcome Pack, in composition:

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

- Proionic Anticellulite Cream – 1 unit;
- Proionic Face Cream – 1 unit;
- Proionic Care Cream – 2 units;
- Massager Electrode 65mm – 2 unit;
- USB – 1 unit;
- Bag for electrodes – 1 unit;

3. PACK GINECO-AESTHETICS, in composition:

- RES Longitudinal electrode (if required) – 1 unit;
- CAP Longitudinal electrode (if required) – 1 unit;
- RES electrode 35 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 30 mm (if required) – 1 unit;
- CAP electrode 40 mm (if required) – 1 unit;

For the sake of brevity, the radiofrequency device hyperthermic ELITE NS may be referred to as ELITE NS, and the radiofrequency device hyperthermic RGN - RGN.

CONTACT INFORMATION

Manufacturer: Indiba, S.A. («Indiba SA », Spain)
 Manufacturer Address: C/Moianés, 13, Polígono Industrial Can Casablanças, 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Spain
 Phone: +34 93 265 55 22/+34 93 721 69 20;
 Fax: +34 93 576 30 40/+34 93 721 47 74
 Place of production: Indiba, S.A. ("Indiba SA"), Spain

Information about the authorized representative of the manufacturer in the Russian Federation:

BW Company Limited Liability Company (BW Company LLC)

Phone: +7 (499) 281-67-68

Email: info@beawire.com

Address: 129085, Moscow, Prospect Mira, 101, bldg. 1, pom. 17

PURPOSE

The product is intended for heating subcutaneous tissues due to radio frequency electromagnetic energy in order to reduce the appearance of cellulite, sagging skin, reduce wrinkles, and it is also used in postoperative tissue repair. The product can also be used to relieve pain, muscle spasms, including the treatment of chronic pelvic pain. The product consists of monopolar applicators connected to an energy generator. The product is not intended for the treatment of malignant tumors.

All-Russian product classifier by type of economic activity (OK 034-2014):

26.60.13.130

The class, depending on the degree of potential risk of medical use in accordance with the nomenclature classifier of medical devices, approved by order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated June 06, 2012 No. 4n:

2a

Product classification in accordance with the nomenclature classifier of medical devices, approved by order of the Ministry of Health of the Russian Federation of June 06, 2012 No. 4n:

237180

Type of contact with the body: Radio-frequency hyperthermic apparatus - short-term contact (less than 24 hours) with intact skin; Longitudinal electrode RES, Longitudinal CAP electrode - short-term contact with intact mucous membranes.

Method of application: in accordance with the instruction manual.

Application conditions: medical institutions, used by qualified and specially trained specialists for adult patients.

OPERATING PRINCIPLE

In the line of devices manufactured by Indiba, S.A. ("Indiba S.A."), Spain (hereinafter referred to as INDIBA, Indiba) uses technology developed by INDIBA to non-invasively stimulate the healing and recovery mechanisms. The technology uses current circulation of a certain frequency (~ 448 kHz), also known as radio frequency current.

The device is a current generator with two operating modes: capacitive (CAP) and resistive (RES).

Current is supplied to the tissue using active electrodes (all electrodes except return electrodes) and a return electrode. To understand the principle of operation, it is necessary to imagine that the current generated in the product enters the active electrode, flows through the human tissues, reaches the return electrode, and then returns to the apparatus, closing the circuit.

The surface area of the active electrode is smaller than that of the return electrode, so the current only affects a certain surface area of the body. This means that the current density in the tissue under the active electrode is greater than the density in the tissue in contact with the return electrode.

In the operating modes described below (resistive and capacitive) at both electrodes (active and return), conductive creams made by INDIBA should always be used to ensure the necessary electrical contact between the electrodes and the tissue.

RESISTIVE MODE (RES)

In resistive mode, an active stainless steel electrode is used. This electrode is a good electrical conductor and acts directly on the treated tissue area (an electrically conductive cream is necessarily applied to the skin).

The current density in the tissue changes proportionally when flowing from the active electrode to the return electrode and reaches a maximum value near the active electrode. As a result of the current, the internal temperature of the tissue rises. The temperature reaches its maximum value near the active electrode, gradually decreasing as it moves away from it.

CAPACITY MODE (CAP)

In capacitive mode, a metal active electrode is used, coated with an insulating material, which acts directly on the treated tissue area (an electrically conductive cream is necessarily applied to the skin).

The electrode has a metal shaft "A" and a metal disk "B" coated with insulating material "C". The current leaving the apparatus passes through the electrode from the shaft "A" to the disk "B" and then is transmitted to the human tissue through the material "C".

As in resistive mode, current flows from the electrode through the tissue to the return electrode ("D"). In this case, the current increases the temperature of the tissue through which it passes. The increase in temperature and the depth of exposure depend on the voltage supplied by the device (depending on the power level selected by the user), the size of the electrode, the characteristics of the treated tissue area and the duration of the procedure.

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª. DOY FE.

acq

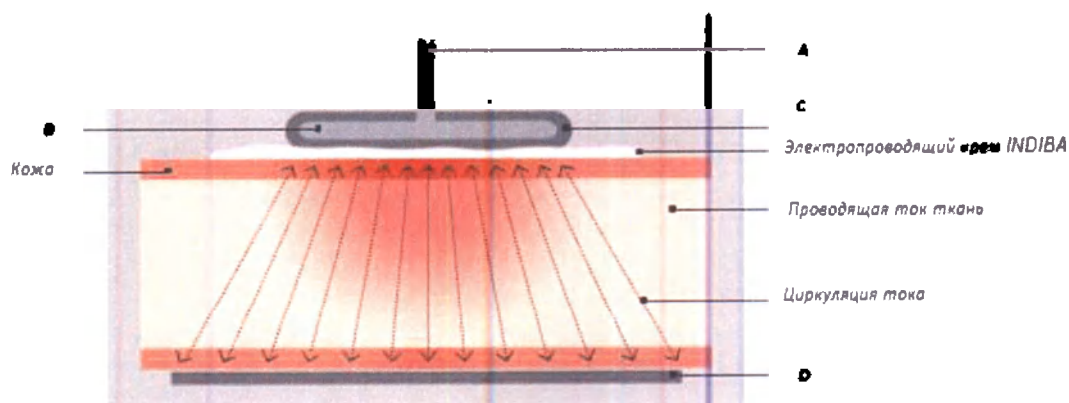


Рис. 1 Принцип действия изделия

In capacitive mode, due to the insulating coating, heat is also generated in the lower part of the electrode, which makes it the preferred mode for processing subcutaneous areas.

In order for the current to pass through the insulation coating, the apparatus must generate a high output voltage.

Despite the fact that both methods increase the internal temperature of the tissue, higher temperatures and processing depths are achieved in the resistive mode.

CONTINUOUS MODULATION

The technology of frequency modulation was first used in surgical electroscalpels - it made it possible to control tissue coagulation and local bleeding.

Modulation is an additional functional mode of the device, which allows you to change the frequency amplitude, which has predefined characteristics. In this mode, the device automatically limits the output power value.

Modulation increases the speed and efficiency of tissue processing, allowing you to reduce the required power and improving the patient's subjective perception during treatment.

This mode can be turned on / off depending on the indications for treatment, the origin and duration of the problem, the location of the affected area, its degree and severity, the treatment regimen and, ultimately, in accordance with the therapeutic objectives.

Key warnings

IMPORTANT: Read the instruction manual carefully before using the machine.

Failure to follow the instructions described in the instruction manual may pose a risk to patients.

The device must be used by professional users who have completed a training course conducted by INDIBA.

WARNINGS:

- To avoid electric shock, the device should only be connected to a grounded electrical circuit.
- Make sure that the required voltage specifications are observed when connecting the device. The range of permissible supply voltages is indicated on the marking on the rear panel of the device.
- For the control panel, use only batteries with the characteristics specified in the instruction manual. Dispose of used batteries in accordance with current regulations.
- Leave a gap of at least 10 cm between the back of the unit and the wall to allow air to circulate through the fan. Make sure that the back of the device is not blocked - make sure that towels or clothes do not block the ventilation holes.
- Use only conductive creams made by INDIBA. The use of other electrically conductive creams may result in poor results and void the warranty on the device. Unapproved electrically conductive creams can cause burns and reduce the life of the electrodes.
- Use only cables supplied by the manufacturer. The use of other cables (for example, longer cables) can change the output values of the device or its resistance to other types of radiation.
- The device must be connected to a power source with an appropriate voltage. The range of permissible supply voltages is indicated on the marking on the rear panel of the device.
- To avoid electric shock, this unit should only be connected to a grounded power source.
- Never alter the design of the unit.
- Do not open or disassemble the unit. In the event of a malfunction: this unit does not contain parts that can be serviced by the user. Repairs to the device should only be carried out by qualified specialists certified by INDIBA.
- In the event of a malfunction or leakage of liquid from the liquid crystal display of the unit, avoid contact with the liquid.
- Do not use the product near short-wave therapy devices, as their radiation may affect the product.
- This unit is not intended for use in flammable environments.
- This device should not be used on patients at the same time as any other product.
- Do not use the device on patients with electronic implants (such as a pacemaker) without a physical examination.
- There should be no rings, earrings, piercings, or other metal objects on the area of the patient to be treated. Avoid contact with conductive parts that may create unwanted paths for radio frequency current. When using the machine, the operator must remove the rings from all fingers.
- The operator must not touch the electrodes with his hands. Always hold the electrode by the electrode handle.
- If the unit is operating, press the pause button before inserting, removing or replacing the electrode.
- Never use capacitive electrodes with signs of wear, such as small holes, cracks, or chips.
- Never use the unit if the return electrode has not been properly secured. Failure to do so may result in burns to the patient.
- Do not use electrodes if there are signs of damage or wear on the cables of the electrode handle.
- Stop the procedure immediately if the patient feels that the electrodes are too hot.
- Before starting the procedure, clean the treated area.
- Remove any products or substances that may affect the procedure from the skin.

- Do not apply excessive force to the shafts of the electrodes when using them; improper handling can lead to their displacement or cracking on the surface of the electrode.
- CAP electrodes are coated with polyamide plastic. Do not expose them to temperatures above 90°C.
- Avoid impact of electrodes, do not scratch them with sharp or pointed objects. If the coating is worn or breaks off the metal part, do not use the CAP electrode - replace it.
- Hypotensive patients undergoing treatment for the cervical spine or any other part of the spine or joints of the limbs may experience a decrease in blood pressure. In this case, treatment should be stopped until the blood pressure level returns to normal.
- Before performing facial treatments in resistive mode, the false jaw should be removed.
- Direct exposure to the testes should only be performed at subthermal temperature.
- Patients taking oral anticoagulants should consult a doctor before starting treatment with this unit.
- The device is intended only for the treatment of adult patients.
- In elderly patients, skin lesions are more likely to occur, therefore treatment should be carried out with extreme care to avoid injuries or skin burns.
- The device should be used with caution in patients with known allergic reactions to nickel and chromium. Stop treatment if an allergic reaction is observed in areas in contact with the return flat electrode, return cylindrical electrode or resistive electrode, or electrically conductive creams.
- The use of resistive treatment regimens in areas with internal infection or encapsulation (abscesses) is not recommended. There is a risk of infection. In this case, you must consult your doctor before starting treatment with this unit.
- When performing gynecological procedures, a specialist is advised to use nitrile or latex disposable gloves (not included in the delivery).

Indications

Skin Tightening:

- Reduction of wrinkles.
- Strengthening the neck and décolleté.
- Reduction of double chin.

Cellulite reduction

- Gynoid lipodystrophy

Body remodeling

- Non-invasive figure correction
- Removal or reduction of excess skin and fat
- Body contouring

Before and after surgery

- Preoperative treatment
- Tissue healing
- Wound healing
- Getting rid of scars
- Burn treatment

Vaginal rejuvenation and related clinical problems

- Correction of vulvovaginal weakness
- Treatment of stress urinary incontinence
- Genitourinary syndrome in menopause
- Sexual dysfunction.

The product can also be used to relieve pain, muscle spasms, including the treatment of chronic pelvic pain. Any treatment, whether monotherapy or a combination of different types of treatment, should be carried out only as prescribed by the doctor.

Contraindications

- The presence of pacemakers or other electronic implants.
- Pregnancy.
- Skin lesions (open wounds or recent burns).
- Thrombophlebitis.
- Lack of sensitivity (congenital insensitivity to pain, nerve damage, paraplegia or pharmacological treatment that reduces sensitivity to pain or heat)
- The product is not intended for the treatment of malignant tumors.

Side effects

After the procedure, patients usually feel warm in the treated area, which may cause some discomfort. In rare cases, the use of electrically conductive creams can cause slight skin irritation.

Product Description

APPEARANCE OF THE PRODUCT



Fig. 2 General view of the product in the embodiment. Radio-frequency hyperthermic device ELITE NS (the main unit is located on the trolley-rack, the drawers are extended, the handles are curved for RES and CAP electrodes and a return flat electrode)

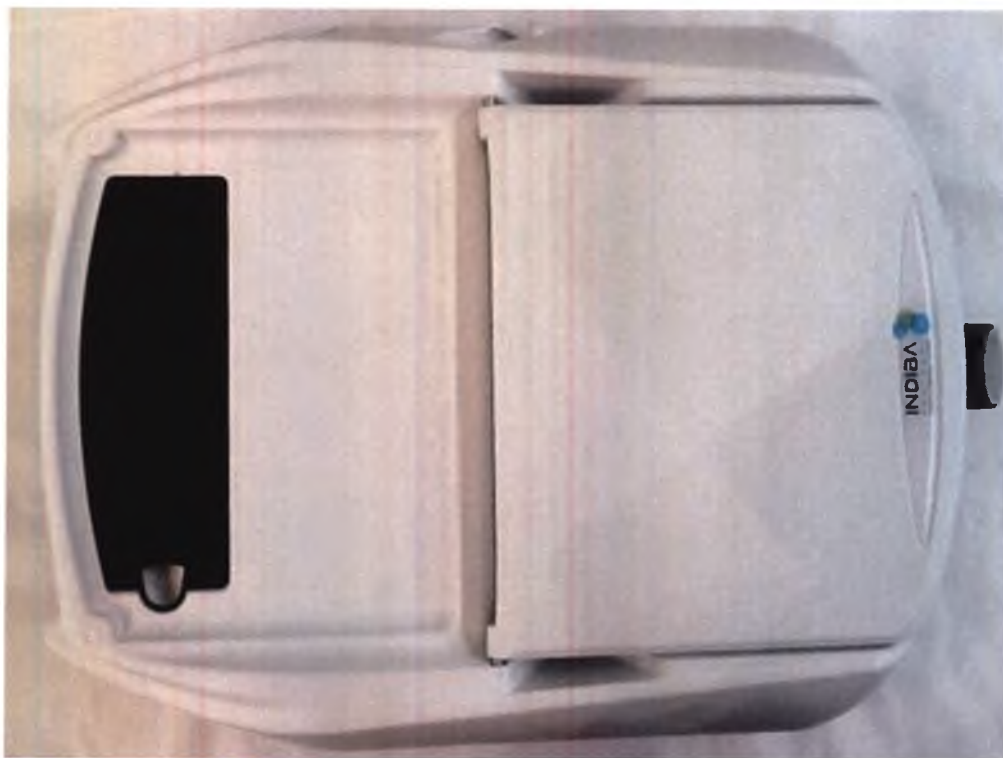


Fig. 3 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (top view with the lid closed)



Fig. 4 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (top view with open lid)

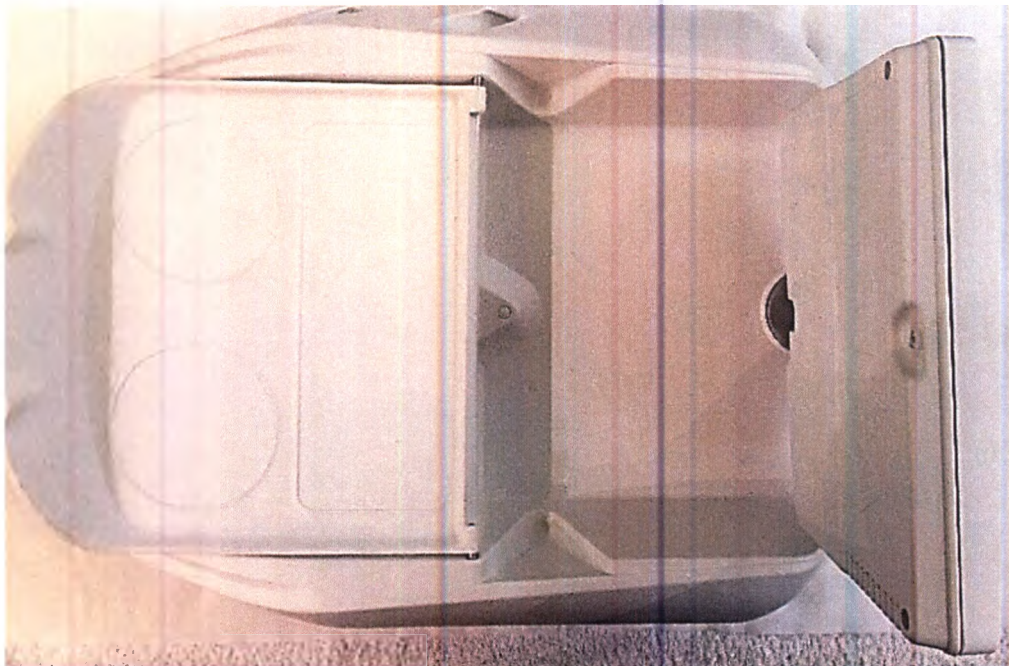


Fig. 5 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (top view with the cover open and the monitor raised)

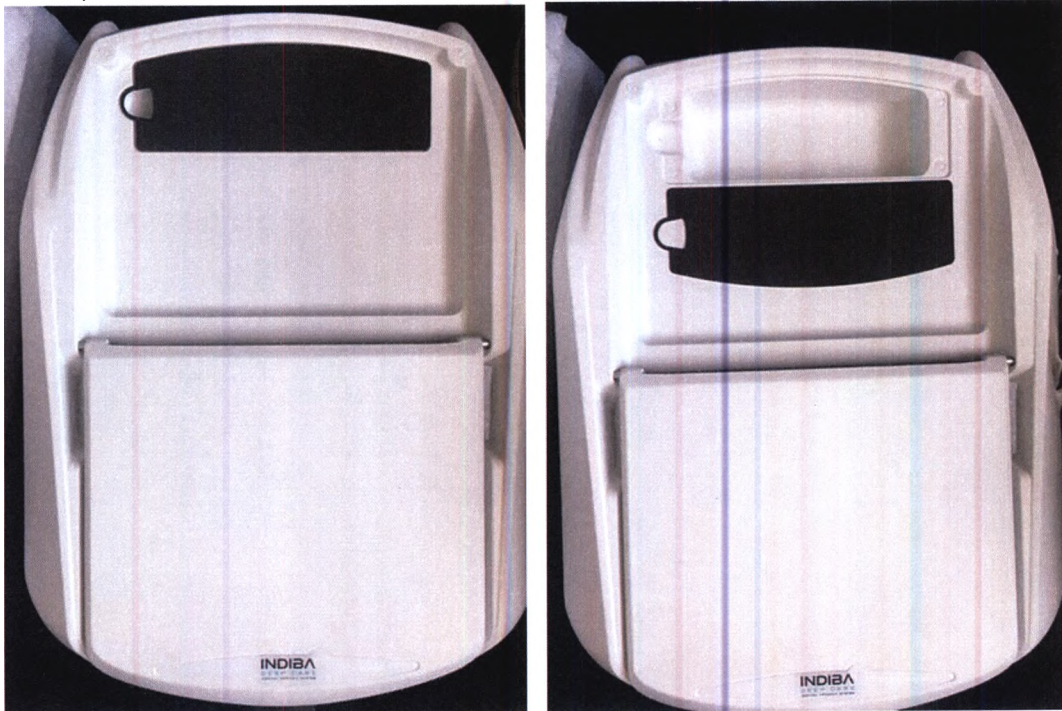


Fig. 6 Product appearance with a closed (left) and open (right) compartment for the control panel. The cover for the control panel is mounted on the housing using built-in magnets.

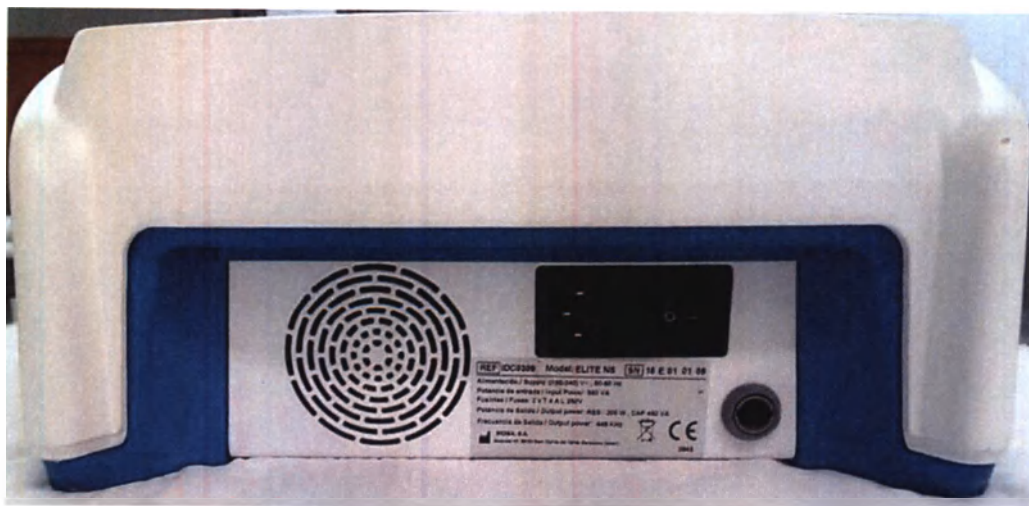


Fig. 7 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (rear view, marking is presented for the ELITE NS version)



Fig. 8 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (side view)



Fig. 9 Socket for connecting return flat and cylindrical electrodes. In order to remove the connector for connecting to the device from the device itself, you must press the top "PUSH" button

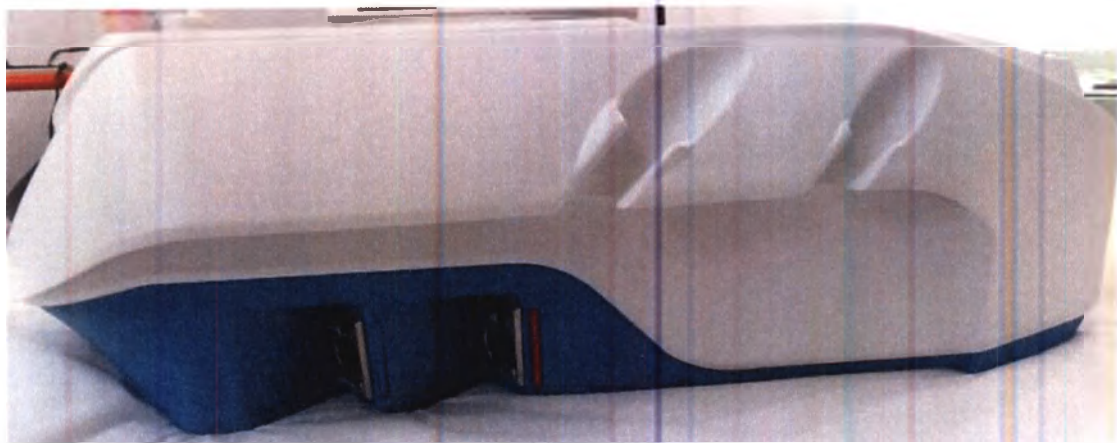


Fig. 10 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (side view)



Fig. 11 Connector for connecting handles for electrodes. Next to each connector is a specific color: "blue" - this connector is for the handle curved for the RES electrode (there is a blue bezel on the handle as a hint to the operator), "red" - this connector is for the handle curved and straight for electrodes CAP (there is a red bezel on the handle as a hint to the operator). In order to remove the connector for connecting to the device from the device itself, you must press the top "PUSH" button.



Fig. 12 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (front view)



Fig. 13 Appearance of the main unit in the ELITE NS and RGN version (bottom view)

Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2020, Sección 2ª, DOY FE
[Signature]



Fig. 14 Remote control



Fig. 15 Shielded power cable



Fig. 16 Bag for electrodes



Fig. 17 Open bag for electrodes. The bag for electrodes opens and closes with a sewn-in zipper. Foamed polyethylene is inserted into the bag to place the electrodes (in the center of each black circle from the pls there is a special hole for the electrode shaft).



Fig. 18 Connection cable



Fig. 19 Curved handle for CAP electrode



Fig. 20 Curved handle for RES electrode



Fig. 21 Straight handle for CAP electrode



Fig. 22 flat return electrode



Fig. 23 Cylindrical return electrode



Fig. 24 Cable return electrode cylindrical

Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.

Sección 2ª

[Signature]



Fig. 25 RES electrode (left) and CAP (right) (also referred to as resistive and capacitive electrodes, respectively)



Fig. 26 Conductive Cream Care Cream (left), Anticellulite Cream (center), Face Cream (right) (in a plastic protective bag)



Fig. 27 USB stick

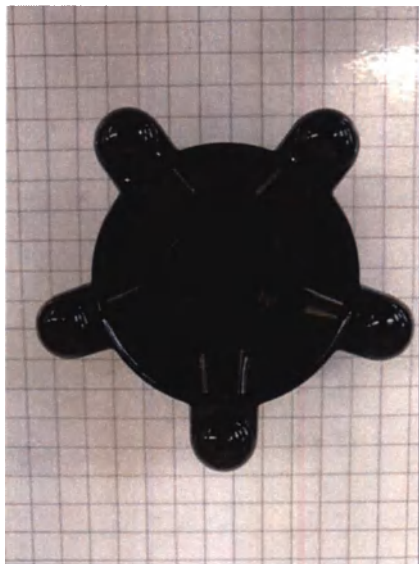


Fig. 28 Massage nozzle



Fig. 29 Trolley (front view) with keys inserted.

Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.
[Signature]



Fig. 30 Rack-trolley (side view with connected cable connecting)

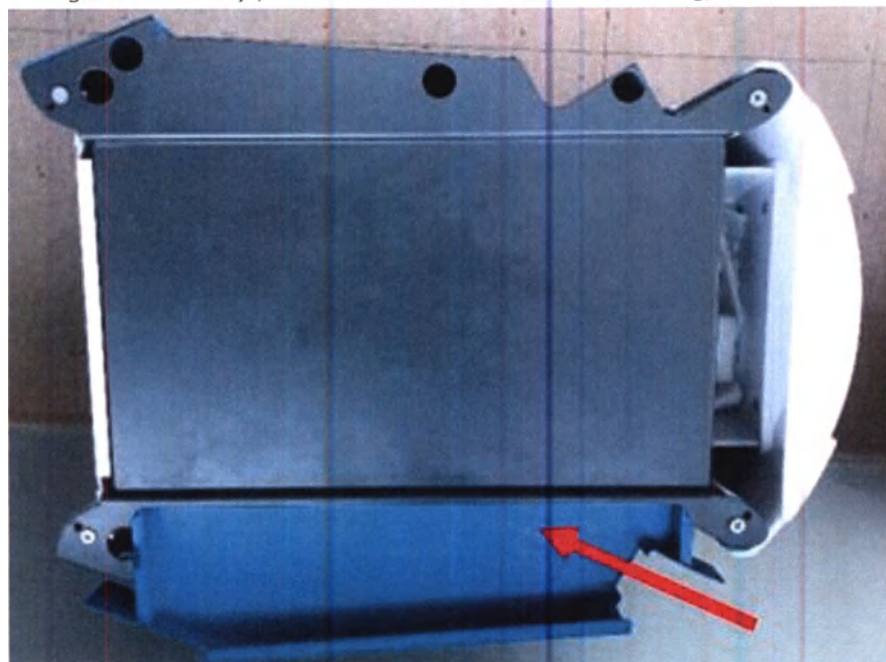


Fig. 31 Rack-cart (top view). The arrow indicates the retractable compartment to accommodate the return flat electrode



Fig. 32 Voltage switching at the rear of the trolley rack and connector for connecting the main unit with the trolley rack



Fig. 33 Longitudinal CAP electrode



Fig. 34 RES electrode longitudinal


Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020, DOY FE

[Handwritten signature]

PRODUCT DESIGN


Front View

1. Touch screen (display)
2. Handle connector for RES electrodes
3. Handle Connector for CAP Electrodes
4. Return electrode connector
5. Power and trigger settings knob / Stopping procedure (also called encoder)

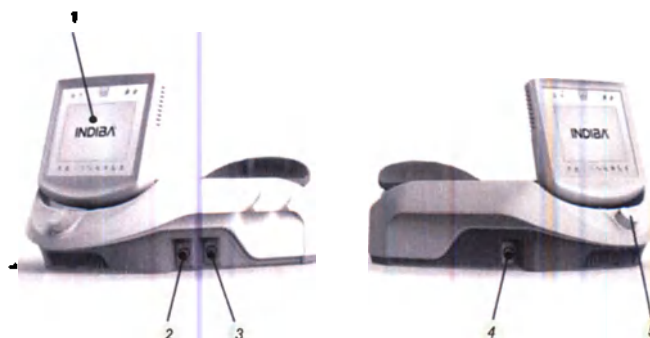

Rear View


6. Power switch
7. Fuse compartment
8. Shielded power cable connector
9. Fan
10. Marking
11. Jack for connecting the cable of the connecting rack trolley

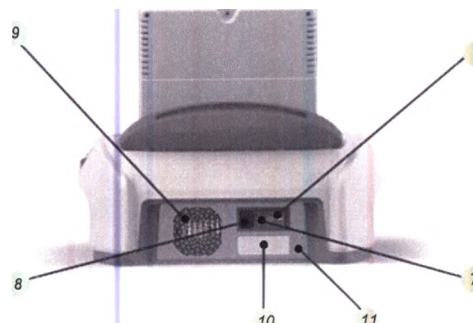

Remote Control

12. Power down button
13. Power increase button
14. Button to start / stop the procedure

The status indicator is marked with an asterisk: on - the device has detected contact with the patient (the procedure is in progress), blinking - the device is waiting for contact with the patient, off - the button for starting the procedure has not been pressed.

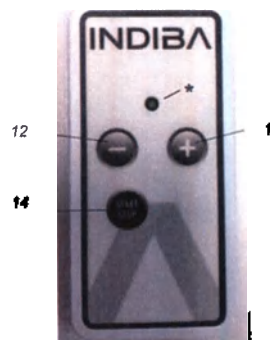

* Comes with a battery for the remote control.

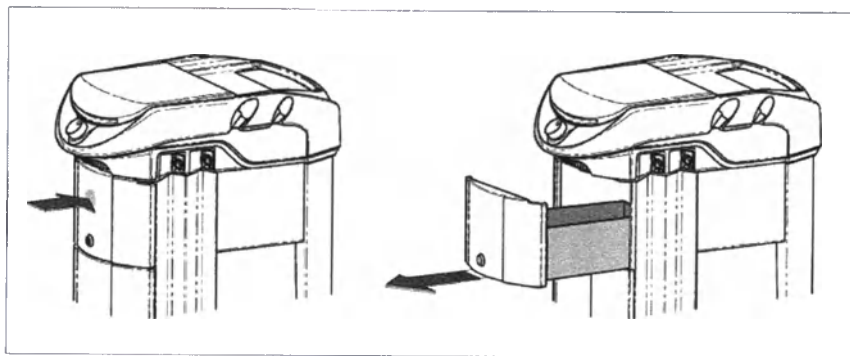


Fig. 35 Opening the drawer racks

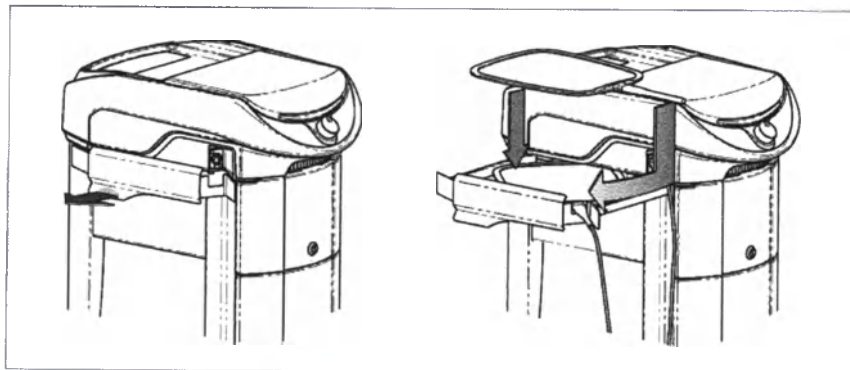


Fig. 36 Opening the drawer for the electrode return flat



Fig. 37 The locking mechanism of the wheels. It is necessary to press the foot on the elements marked by arrows to block the movement of the rack-cart

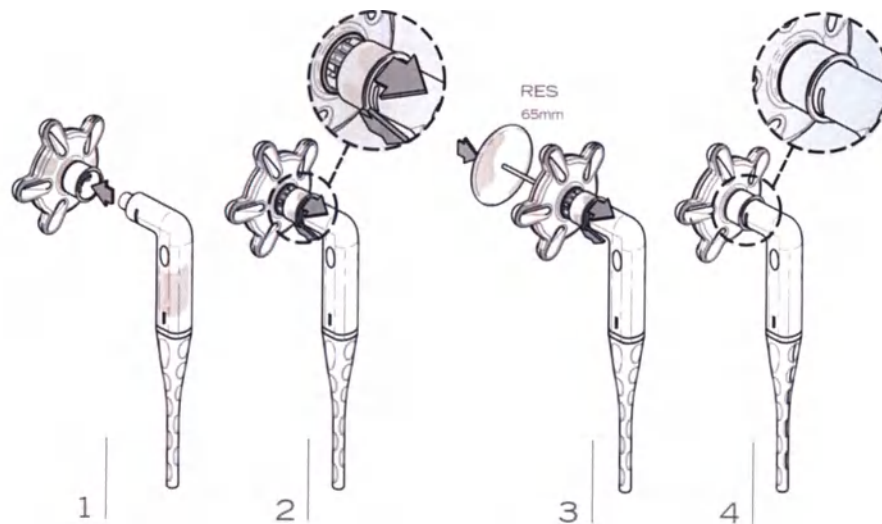


Fig. 38 Installation instructions for the massage nozzle. The massage nozzle can only be used with a 65 mm diameter RES electrode.

Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.
alcan

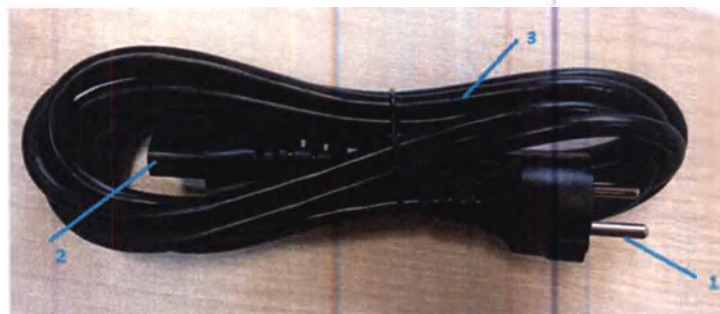


Fig. 39 Shielded Power Cable Design

- 1 - Power plug for connecting to the power supply
- 2 - Connector for connecting to the device
- 3 - Shielded power cable wire

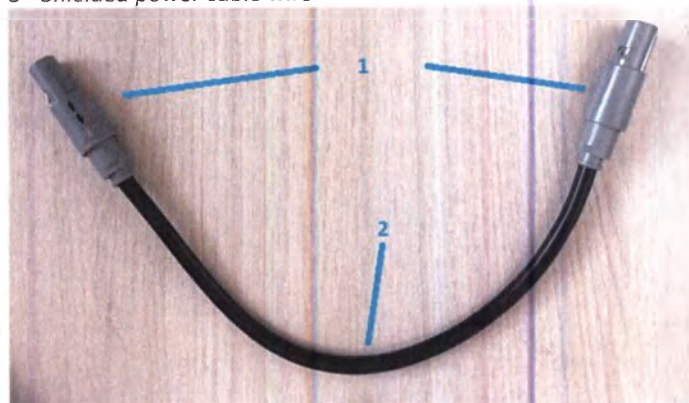
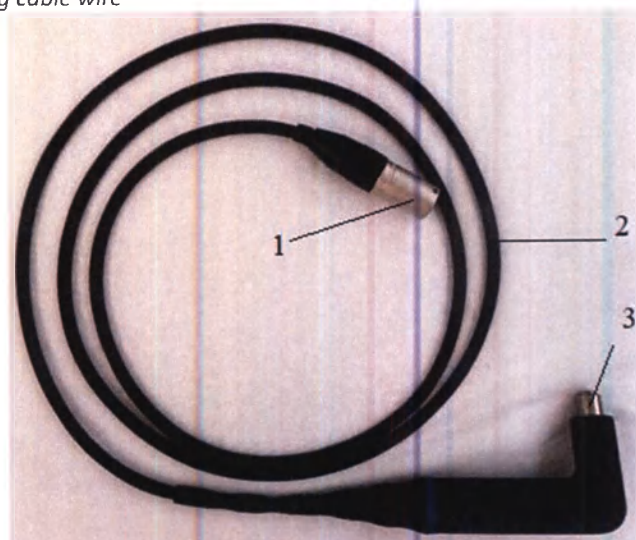


Fig. 40 Cable design

- 1- Connectors for connecting to the trolley-rack and the main unit (have the same interface)
- 2 - Connecting cable wire



*Fig. 41 Curved handle design for RES electrode
(other handles have a similar design)*

- 1 - Connector for connecting to the device
- 2 - The wire of the handle bent for the electrode RES
- 3 - Connector for connecting the RES electrode

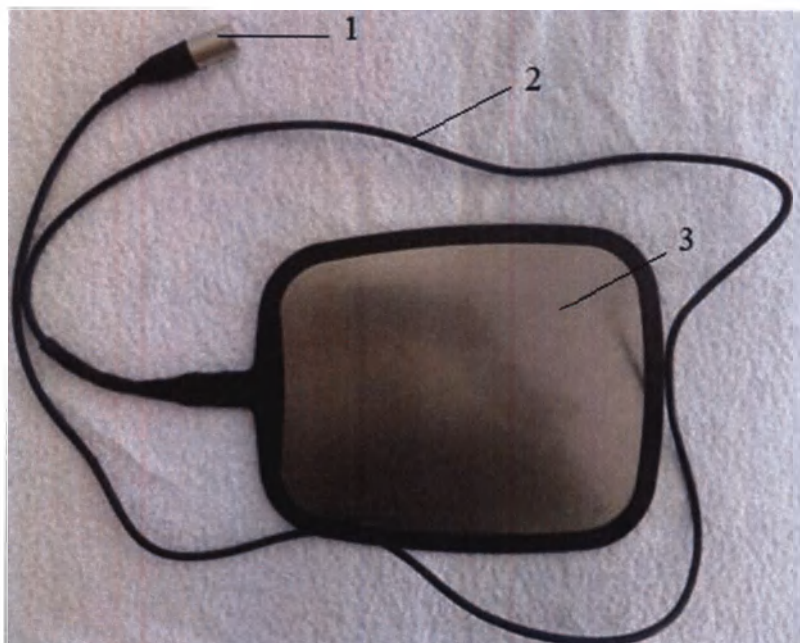


Fig. 42 Flat electrode return design
 1 - Connector for connecting to the device
 2 - wire return flat electrode
 3 - Return flat electrode



Fig. 43 The design of the cable return electrode cylindrical
 1 - Connector for connecting to the electrode return cylindrical
 2 - Connector for connecting to the device
 3 - Wire cable electrode return cylindrical

Ha causado el asiento n° 97
 de mi Libro Indicador del año 2020, DOY FE
 Sección 2ª,
 asdr

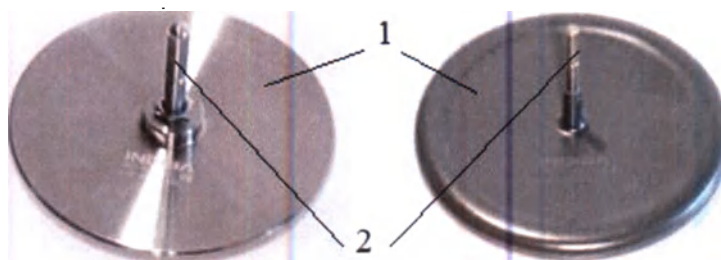


Fig. 44 Electrode design RES (left) and CAP (right)

1. The electrode
2. Electrode shaft

APPOINTMENT OF PRODUCT ELEMENTS


Block main ELITE NS, Main RGN Block	Generates a high-frequency electric current, controls the operation of the device.
Trolley	Serves as a stand for the main unit and the method of its movement using the wheels of the trolley rack. Its drawers can be a storage place for product items.
Shielded power cable	Used to connect the device to the power supply.
Connecting cable	Serves to transfer energy from the main unit to the trolley rack. Since the return flat electrode is in direct contact with the patient, it is important that the patient is comfortable touching him. Inside the trolley rack there is a heater, and the return flat electrode placed in a special compartment is heated to a comfortable temperature.
Cylindrical Return Electrode Cable	Using this cable, a return cylindrical electrode can be connected to the device.
Electrode bag	In it you can store and transfer electrodes.
Key	Trolley racks can be locked with keys.
Handle (all versions)	Used to connect electrodes
Electrode RES, CAP (all versions)	Serves for supplying radio frequency current to the patient's body.
Return electrode (all versions)	It serves to close the circuit between the patient and the main unit.
Пульт управления	Serves for remote control of the device
Conductive cream (all versions)	Serves to reduce the electrode-skin contact resistance during the procedure, also minimizes friction between the skin and the electrode.
Massage nozzle	Attaches to the electrode to create an additional massage effect during the procedure.
USB stick	The USB drive contains photos of the device, photos of the procedures, advertising photos and videos, as well as an instruction manual.

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY FE.

Handwritten signature

PRODUCT CONTROLS

- 15. Return button to the main screen
- 16. Button to return to the previous screen
- 17. Access button in the settings menu
- 18. Button on / off monitoring program
- 19. On / off button for heating the return flat electron *
- 20. Product operation information display button

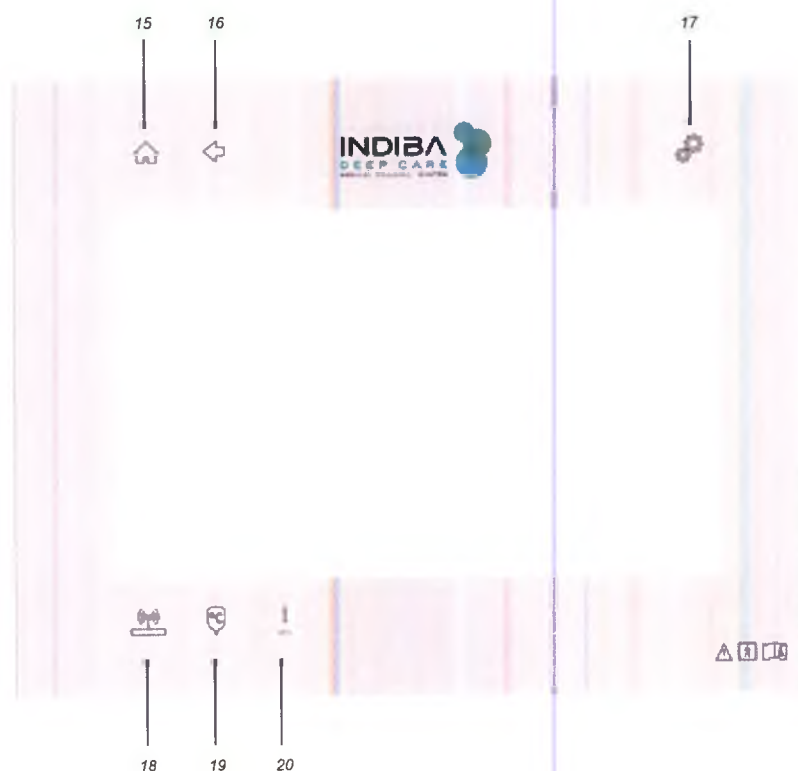

The presence of these icons depends on the status of the display.


(*) This function is only available if the product is mounted on a trolley rack and connected to it using a connecting cable.

Product Operation


PRIMARY INSTALLATION

The initial installation of the product can be carried out by the end user.

In order to install the main ELITE NS unit on a trolley rack, it is necessary to adhere to the installation diagram shown below. On the block there are mainly special protruding elements, which, when installed correctly, should completely coincide with the holes on the top panel of the trolley-rack. A correctly installed main unit must not wobble on a cart stand.

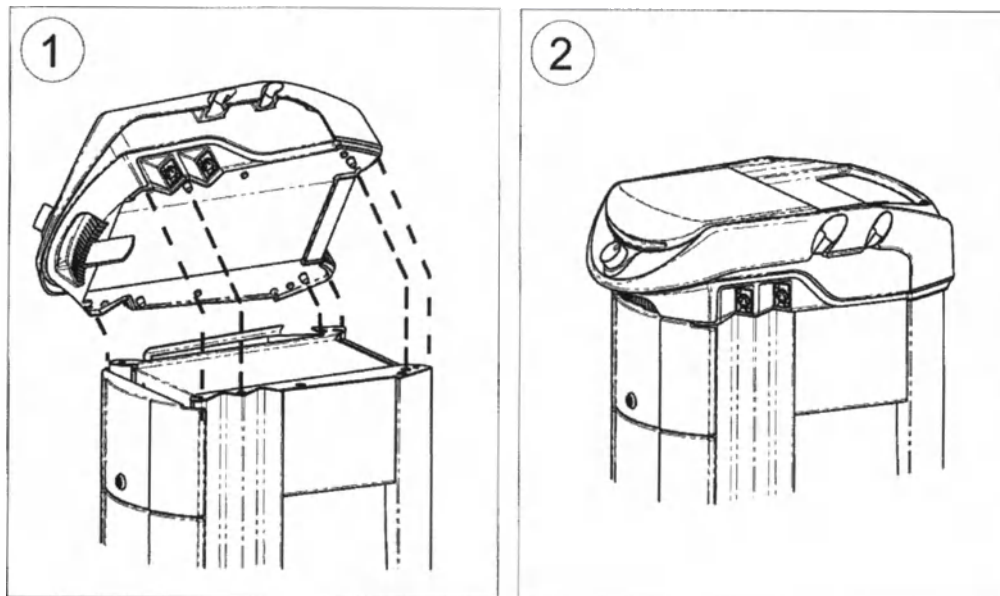


Before turning on the device, select the appropriate mains voltage.

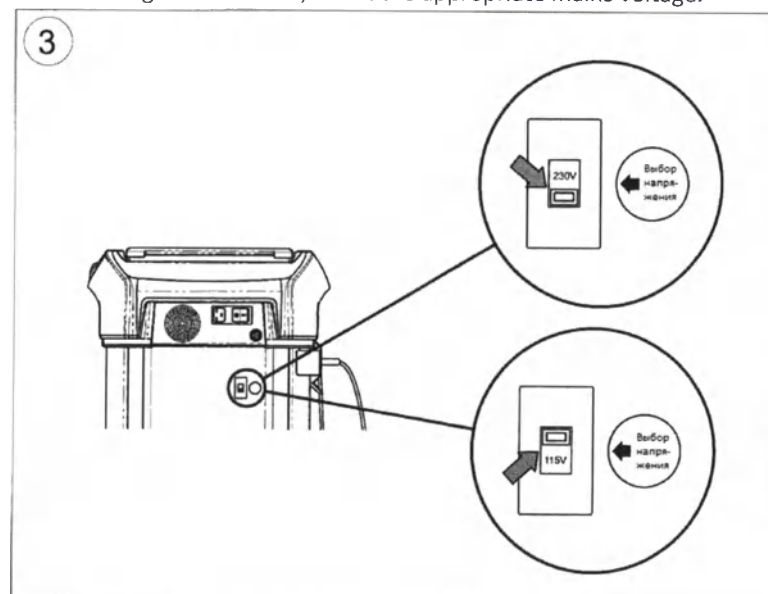

Ha causado el asiento n° 97 de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª. DOY FE

Connect the connecting cable to the connector of the main unit to enable heating of the surface intended for placement of the return flat electrode.

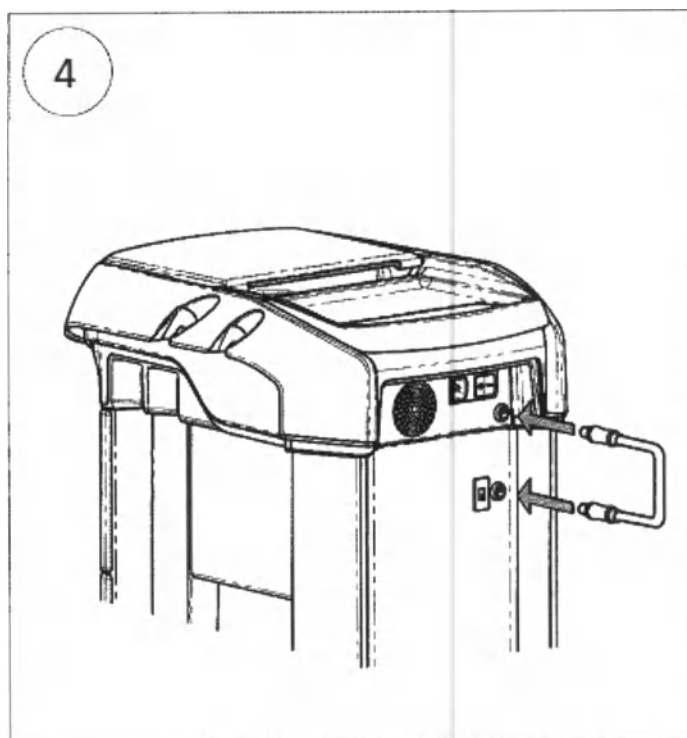

TURNING ON

1. Connect the shielded power cable to the back of the unit (8).
2. Plug the shielded power cable into a power outlet.
3. Turn on the machine by pressing the power switch on the rear panel (6).

TURNING OFF

If the machine is not in use, press the power switch on the rear panel (6) and set it to the "off" position. It is recommended to turn off the product if it is not planned to use it for several hours.

Interface navigation

When turned on, the start screen should appear for a few seconds on the screen of the device (the device is loaded and checked at the same time).



At the end of the launch, the main screen should appear:

- 21. Button to start the procedure based on the countdown
- 22. Start button for a procedure based on the amount of energy transferred
- 23. Button to go to saved procedures



Buttons 21, 22 and 23 can be selected using the encoder (5).




Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY FE

[Handwritten signature]

TIME-BASED PROCEDURES

When you press the start button of the procedure based on the countdown (21), the device displays the following screen:

24. Button for increasing the duration of the procedure
25. Button to reduce the duration of the procedure
26. On / off button for monitoring the limit value of the output power
27. On / off button for modulating the output signal
28. Mode select button (CAPACITY (CAP) / RESISTIVE (RES))
29. Button to complete the procedure
30. "PAUSE" button, which pauses the procedure
31. The "START" button, which starts the procedure

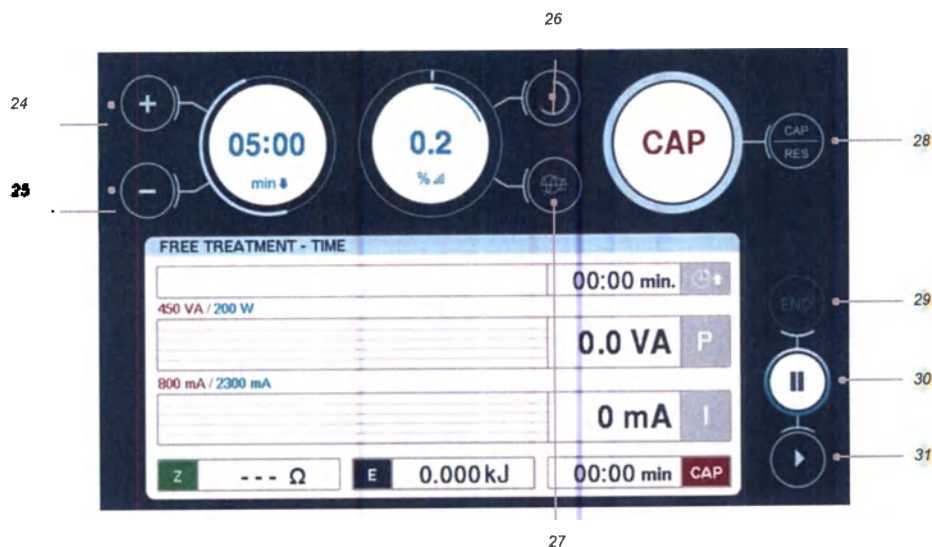

Before starting the procedure, you can set the following values:

- Procedure time: to do this, press the increase button (24) and decrease the duration of the procedure (25). The minimum time is 1 minute and the maximum is 99 minutes. The duration of the procedure can be increased or decreased in increments of one minute.
- The output power can be changed using the encoder (5) or buttons (12) and (13) on the control panel. The output power can be changed from 0 to 100%, in each range of values its own increment step:
 - Output power up to 5% - step 0.2% for the ELITE NS model and 1% for the RGN model.
 - Output power from 5% to 30%, step 1%.
 - Output power from 30% to 100% - step 2%.
- Selecting an operating mode using the mode selection button (28).
- The control of the output power limit value (26) can be turned on / off in the "Settings" menu (17). This button (26) is used to enable or disable this option. You can change the limit value of the output power without going to the "Settings" menu by pressing and holding the button (26).
- Button (27) allows you to enable / disable the modulation of the output signal. When modulating, the device automatically limits the output power.

The following values can be set during the procedure.

- Output power - use the encoder (5) or buttons (12) and (13) on the control panel.
- Procedure time - you can increase (24) and decrease (25) the procedure time.

Capacitive Time Based Procedure (CAP)

The device displays the following operating parameters:

32. Time (in minutes) set by the user. After the procedure time has elapsed (the set time is displayed by the timer), the device emits a sound signal that marks the end of the procedure and stops supplying output power. A message appears on the display that the procedure has been completed.
33. The indicator of the output power level in%.
34. Operation mode indicator (CAP).
35. Time (in minutes). The cumulative time from the start of the procedure to the current moment.
36. Transmitted apparent power: current value of apparent power supplied in VA (volt-amperes). This value is the sum of resistive power (active or true) and reactive power (isolating). The main graph shows the change in this value over the past procedure time.
37. Output current (I): current value of the current flowing through the electrode and tissue, measured in milliamperes (mA). In the "Settings" menu (17) you can select the value (Ω or mA), the change of which you want to show on the graph.
38. Impedance (Z) measured in Ohms (Ω): current resistance value of body tissue and electrode. If three dashes ("---") appear, this value is too large and therefore goes beyond the scale, or the output power is too low to correctly perform this measurement. The product can be configured so that the second graph shows the change in this value during the procedure.
39. Energy (E), measured in kilojoules (kJ): the cumulative value of the power supplied during this step of the procedure.
40. Time (in minutes). The cumulative value of the duration of the procedure.




Time Based Resistive Procedure (RES)

The product displays the following operating parameters:

32. Time (in minutes) set by the user. After the procedure time has elapsed (the set time is displayed by the timer), the device emits a sound signal that marks the end of the procedure and stops supplying output power. A message appears on the display that the procedure has been completed.
33. The indicator of the output power level in%
34. Operating mode indicator (RES).
35. Time (in minutes). The cumulative time from the start of the procedure to the current moment.
36. Transmitted apparent power: current value of apparent power supplied in watts (W). The main graph shows the change in this value over the past procedure time.
37. Output current (I): current value of the current flowing through the electrode and tissue, measured in milliamperes (mA). In the "Settings" menu (17) you can select the value (Ω or mA), the change of which you want to show on the graph.


- 38 Electrical resistance (R), measured in Ohms (Ω): current value of tissue resistance. If three dashes ("---") appear, this value is too large and therefore goes beyond the scale, or the output power is too low to correctly perform this measurement. The product can be configured so that the second graph shows the change in this value during the procedure.
- 39 Energy (E), measured in kilojoules (kJ): the cumulative amount of energy supplied during this step of the procedure.
40. Time (in minutes). The cumulative value of the duration of the procedure.

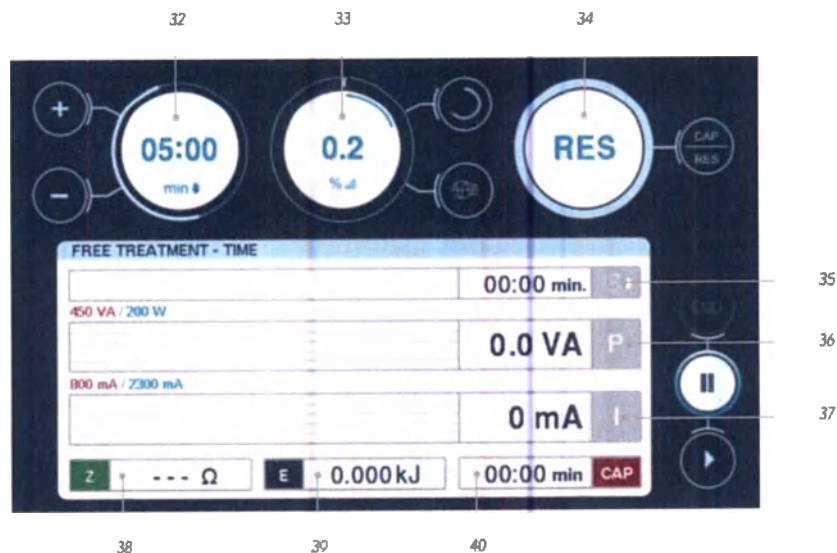

PROCEDURES BASED ON THE AMOUNT OF TRANSFERRED ENERGY

When you press the start button of the procedure based on the amount of energy transferred (22), the device displays the following screen:

24. Button to increase the amount of energy transmitted.
25. Button to reduce the amount of energy transmitted.
- 26 On / off button for monitoring the limit value of the output power.
- 27 Button to enable / disable modulation of the output signal.
28. Mode select button (CAPACITY (CAP) / RESISTIVE (RES)).
29. Button to complete the procedure.
30. The "PAUSE" button, which pauses the procedure.
31. The "START" button, which starts the procedure.

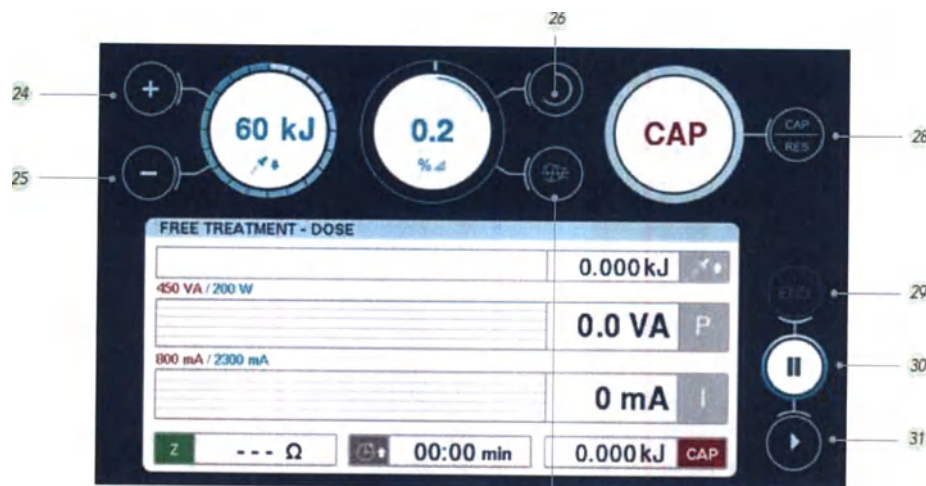

Before starting the procedure, you can set the following values:

- The amount of energy transferred can be increased or decreased using the increase (24) and decrease (25) buttons. The minimum amount is 1 kJ, and the maximum is 999 kJ. The amount of energy transferred can be increased or decreased in increments of 1 kJ. You can also increase or decrease the value by 10 kJ by pressing and holding the button for the amount of energy transferred.
- The output power can be changed using the encoder (5) or buttons (12) and (13) on the control panel. The output power can be changed from 0 to 100%, in each range of values its own increment step:
 - Output power up to 5% - step 0.2% for the ELITE NS model and 1% for the RGN model.
 - Output power from 5% to 30%, step 1%.
 - Output power from 30% to 100% - step 2%.
- Selecting an operating mode using the CAP / RES button (28).
- The control of the output power limit value (26) can be turned on / off in the "Settings" menu (17). This button (26) is used to enable or disable this option. You can change the limit value of the output power without going to the "Settings" menu by pressing and holding the button (26).
- Button (27) allows you to enable / disable the modulation of the output signal. When modulating, the device automatically limits the output power.

During the procedure, the following values can be set:


- Output power - use the encoder (5) or buttons (12) and (13) on the control panel.
- Procedure time - you can increase (24) and decrease (25) the procedure time.

Capacitive Capacitive Transfer Procedure (CAP)

The product displays the following operating parameters:

32. The amount of energy transmitted (kJ) as set by the user. After reaching a predetermined amount of transmitted energy (the set value displays the counter of transmitted energy), the device emits a sound signal that marks the end of the procedure and stops supplying output power. A message appears on the display that the procedure has been completed.
33. The indicator of the output power level in%.
34. Operation mode indicator (CAP).
35. Energy (E), measured in kilojoules (kJ): the cumulative value of the energy transferred from the beginning to the current moment.
36. Total power: current value of the total power supplied in VA (volt-amperes). This value is the sum of resistive power (active or true) and reactive power (isolating). The main graph shows the change in this value over the past procedure time.
37. Output current (I): current value of the current flowing through the electrode and tissue, measured in amperes (A). In the "Settings" menu (17) you can select the value (Ω or mA), the change of which you want to show on the graph.


38. Impedance (Z) measured in ohms (Ω): current resistance value of body tissue and electrode. If three dashes ("---") appear, this value is too large and therefore goes beyond the scale, or the output power is too low to correctly perform this measurement. The product can be configured so that the second graph shows the change in this value during the procedure.
39. Time (in minutes). The cumulative time from the start of the procedure to the current moment.
40. Energy (E), measured in kilojoules (kJ): the cumulative amount of energy supplied during this step of the procedure

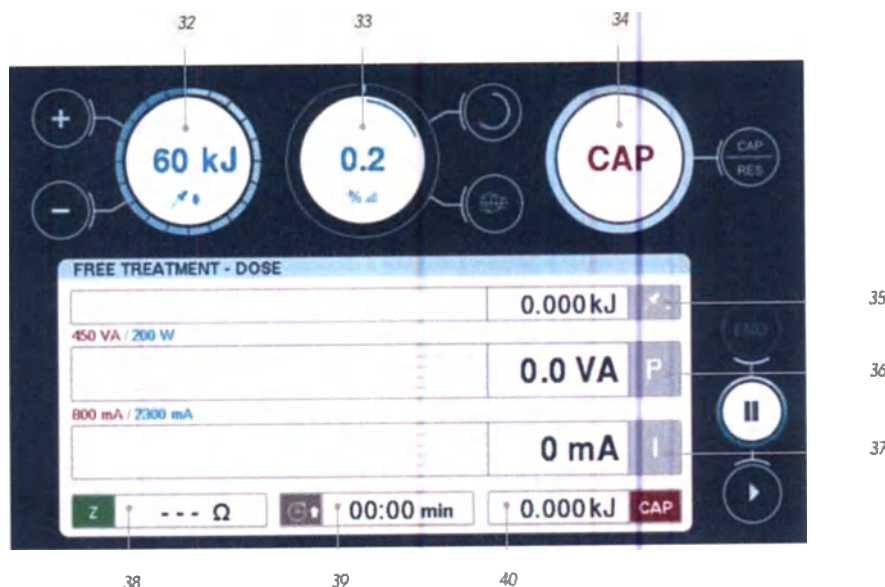

Energy Resistant Transmission Procedure (RES)

The device displays the following operating parameters:

32. The amount of energy transmitted (kJ) as set by the user. After reaching a predetermined amount of transmitted energy (the set value displays the counter of transmitted energy), the device emits a sound signal that marks the end of the procedure and stops supplying output power. A message appears on the display that the procedure has been completed.
33. The indicator of the output power level in%.
34. Operating mode indicator (RES).
35. Energy (E), measured in kilojoules (kJ): the cumulative amount of energy supplied from the beginning of the procedure to the current moment.
36. Gross Power: The current value of gross power supplied in watts (W). The main graph shows the change in this value over the past procedure time.
37. Output current (I): current value of the current flowing through the electrode and tissue, measured in amperes (A). In the "Settings" menu (17) you can select the value (Ω or mA), the change of which you want to show on the graph.
38. Electrical resistance (R), measured in Ohms (Ω): current value of tissue tissue resistance. If three dashes ("---") appear, this value is too large and therefore goes beyond the scale, or the output power is too low to correctly perform this measurement. The product can be configured so that the second graph shows the change in this value during the procedure.
39. Time (in minutes). The cumulative time from the start of the procedure to the current moment.
40. Energy (E) measured in kilojoules (kJ): the cumulative value of the power supplied during this step of the procedure.

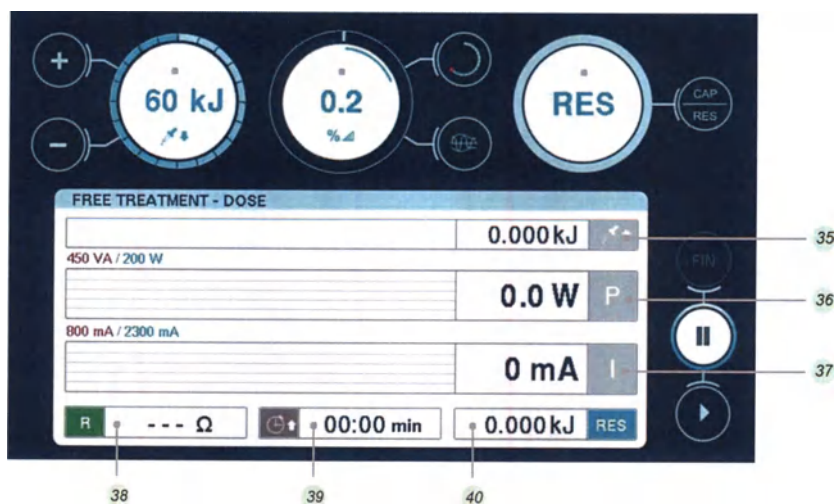


USE OF PROCEDURES

To start or end a procedure:

- Press the "START" button (31) on the device, or the "START / STOP" button on the control panel (14), or set the encoder (5) to the "Ready for contact" state.
- When an electrode contact with a patient is detected, the icon flashes. The countdown of the procedure has not yet begun.
- When the device detects that the electrode is touching the patient, it switches to the status "Procedure in progress", displays the selected parameters of the procedure and starts the countdown of the procedure. The icon indicating that the device has detected contact with the patient's body disappears.
- If the contact between the electrode and the patient disappears during the procedure, the device detects this and returns to the "Ready for contact" state. At the same time, the countdown of the procedure is suspended. When the electrode comes into contact with the patient again, the device switches to the "Procedure is in progress" state.
- To stop the procedure, press the PAUSE button (30) on the device, or the START / STOP button (14) on the control panel, or use the encoder (5).
- To end the procedure and reset the total time of the procedure and the energy transferred to the current point in time, press the END button (29). When you click on this button, a pop-up window appears with a brief description of the various steps in this procedure.
- Press the HOME button (15) to return to the main screen of the unit.

SAVED PROCEDURES

Press the button (23) to access the stored procedures.

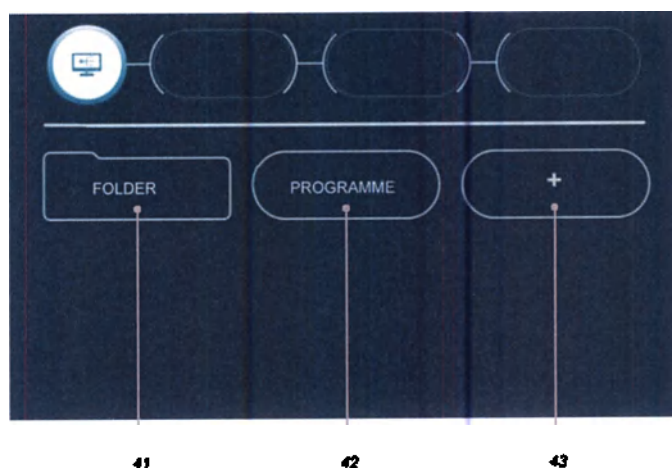

- 41 Folder selection button.
- 42 Program selection button.
- 43 Button to add a folder or program.

Above the dividing line on the screen are navigation buttons. They tell the user which folder is currently

open. There are three possible levels. In the first two, both folders and programs are allowed, and the third level is intended only for programs.


The button highlighted in the navigation area indicates to the user at what stage of the selection of the stored procedure he is.

To change the type of procedure, the user must use the buttons above the dividing line on the display.

The buttons below the dividing line are buttons for selecting or entering stored procedures.

Creating Procedures

To create a procedure, press the button (43), after which the following screen will appear:

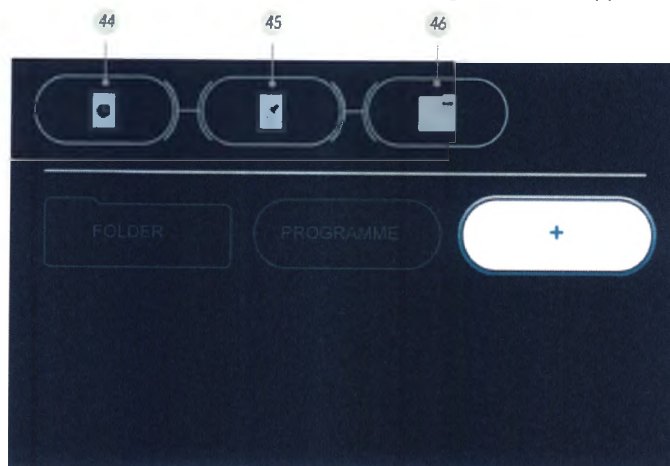

44. Creating a time-based program.

45. Creating a program based on the amount of energy transferred.

46. Creating a folder.

After pressing any of these buttons, enter the name of the new item and click on the confirmation button to continue.



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE


Sección 2ª,
DOY FE

[Handwritten signature]

- * To create programs based on the countdown, the device uses the following screen (44):



- 47. The choice of the mode of the stage of the procedure (in this case, CAP).
 - 48. The choice of the mode of the stage of the procedure (in this case, RES).
 - 49. . Timing of the stage of the procedure. The minimum time is 1 minute and the maximum is 99 minutes. Time can be increased or decreased at intervals of one minute.
 - 50. The choice of the output signal (in this case, the signal is modulated).
 - 51. . The choice of the output signal (in this case, the signal is not modulated).
 - 52. Selecting an IAS value. IAS values can be increased or decreased at intervals of 1.
 - 53. . The choice of the limiting value of the output power. The minimum value is 5%, and the maximum is 90%. The value from 5% to 30% can be increased or decreased with an interval of 5%. The value from 30% to 90% can be increased or decreased with an interval of 10%.
 - 54. Select the previous step of the procedure.
 - 55. . Select the next step in the procedure.
 - 56. . Deletion of a procedure step.
 - 57. Increase the selected value.
 - 58. Decrease the selected value.
 - 59. Confirmation of the program.
- After pressing the program confirmation button (59), the unit will return to the selection screen and a new program will appear.

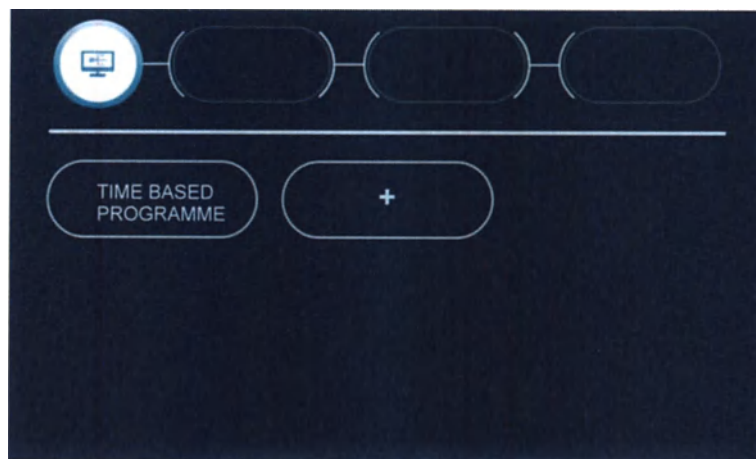


* IAS = INDIBA analogical scale


- To create programs based on the amount of energy transferred, the device uses the following screen (45):




47. The choice of stage mode (in this case, CAP).
48. . The choice of stage mode (in this case, RES).
49. . The choice of the amount of energy transferred to the stage of the procedure (the minimum value is 1 kJ, and the maximum is 999 kJ, the change step is 1 kJ). The energy value can be increased or decreased by 10 kJ by pressing and holding the button for determining the amount of energy transferred.
50. . The choice of the output signal (in this case, the signal is modulated)
51. . The choice of the output signal (in this case, the signal is not modulated).
52. Selecting an IAS value. The IAS value can be increased or decreased with an interval of 1 point.
53. . The choice of the limiting value of the output power. The minimum value is 5%, and the maximum is 90%. The value from 5% to 30% can be increased or decreased with an interval of 5%. The value from 30% to 90% can be increased or decreased with an interval of 10%.
54. . Select the previous step of the procedure.
55. . Select the next step in the procedure.
56. . Deletion of a procedure step.
57. . Increase the selected value.
58. Decrease the selected value.
59. Confirmation of the program. After pressing the program confirmation button (59), the unit will return to the selection screen and a new program will appear.

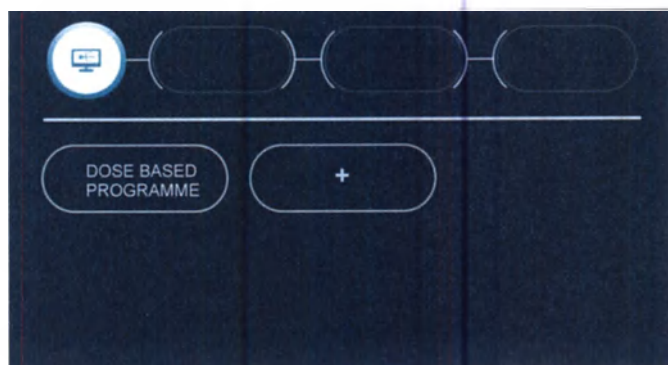

When creating a folder (46), the device displays your current location and adds the created folder:

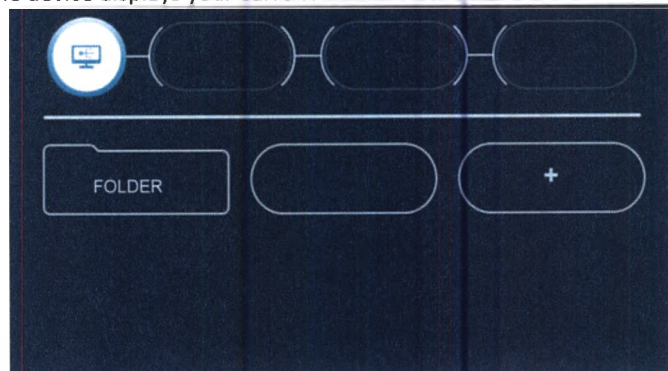


Click on the created folder to go to a new level in the structure, where you can create a new program or folder:

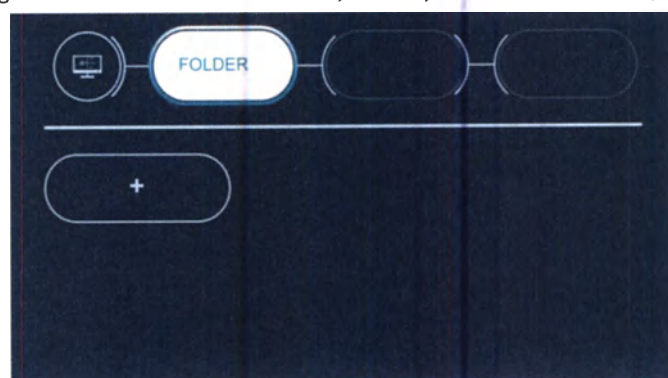

46

НАВИГАЦИЯ ПО ИНТЕРФЕЙСУ

Click on the created folder to go to a new level in the structure, where you can create a new program or folder:

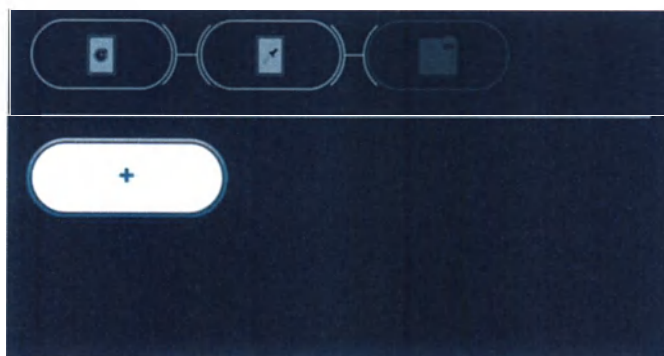

Folder management

To manage the folder, hold down the corresponding button for 5 seconds, after which the following options will appear:

60

61



60. . Edit the name of the folder.

61. . Delete the folder (this is possible only if the folder is empty).

Note: The predefined INDIBA folders cannot be changed, deleted, moved or duplicated.

Program management

To control the program, hold down the corresponding button for 5 seconds, after which the following options will appear:

60

61

62

63





- 60. . Change the program.
- 61. . Uninstall the program.
- 62. . Move the program to a folder or subfolder.
- 63. . Copy the program to a folder or subfolder.

Note: The predefined INDIBA folders cannot be changed, deleted, moved or duplicated. They can only be duplicated for use as a template for a new saved program.



Change folders and programs

To exit the program without saving the changes, press the button with the arrow (16). If you save the changes, a message appears on the screen stating that the changes were successfully made:

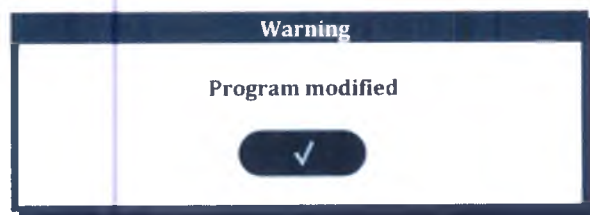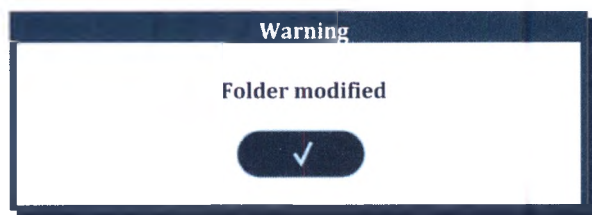


Delete folders and programs

To exit the program without saving the changes, press the button with the arrow (16). If you save the changes, a message appears on the screen stating that the changes were successfully made:

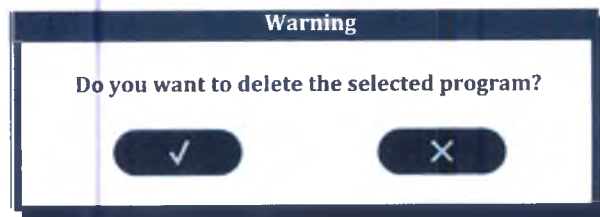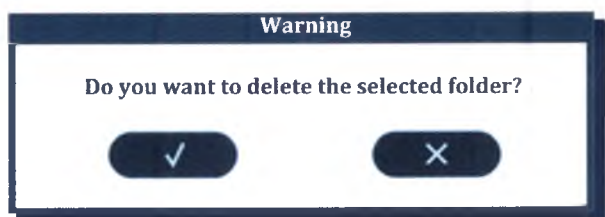

If the folder cannot be deleted, the following message appears on the screen stating that the folder cannot be deleted because it contains data:

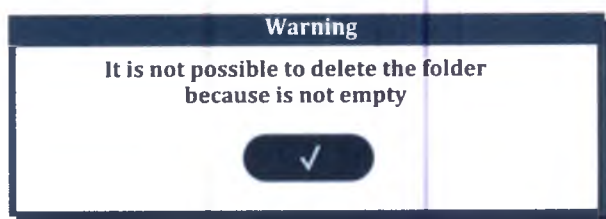


Note: Before deleting, make sure the folder is empty.

Moving Programs

Open folders and subfolders until you are where you want to move the program (the text of the item that will be moved will turn green). Click on an item to confirm that you want to move the program.


A message will appear on the screen informing the user that the program has been correctly moved:

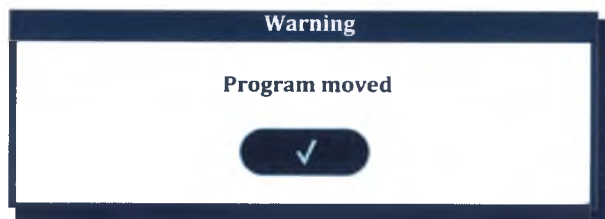

Copying Programs

Open folders and subfolders until you are where you want to move the program (the text of the item that will be moved will turn green). Click on an item to confirm that you want to copy the program.


A message will appear on the screen informing the user that the program has been correctly copied:

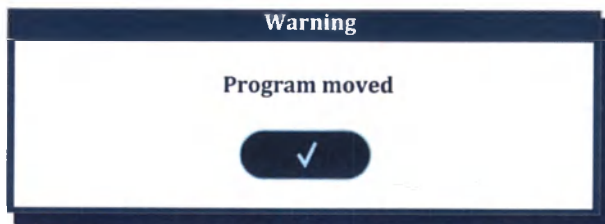

Loading saved procedures

Using the buttons under the dividing line of the screen, open folders and subfolders until you find the appropriate program.

When you click the buttons, they appear above the dividing line.

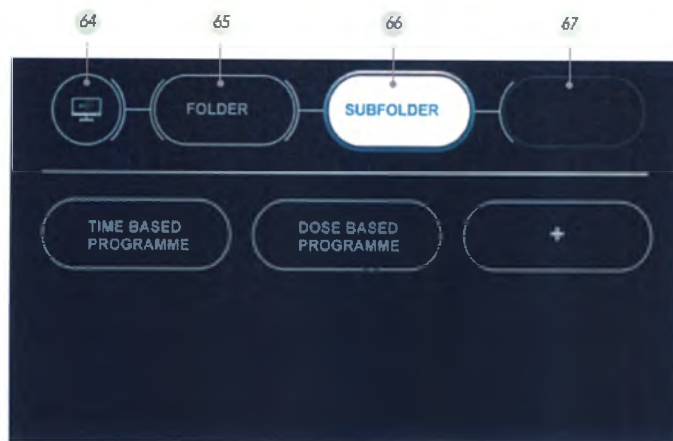

64. Screen saved procedures.


65. . The selected folder.

66. . Selected subfolder. Current position.

67. The folder or program to be selected.

If the user has not found the necessary program, he can go back using the buttons 64, 65 and 66, or use the navigation button to return to the previous screen (16).

After selecting a program, the device shows the various stages of the saved program that will be used during the procedure:

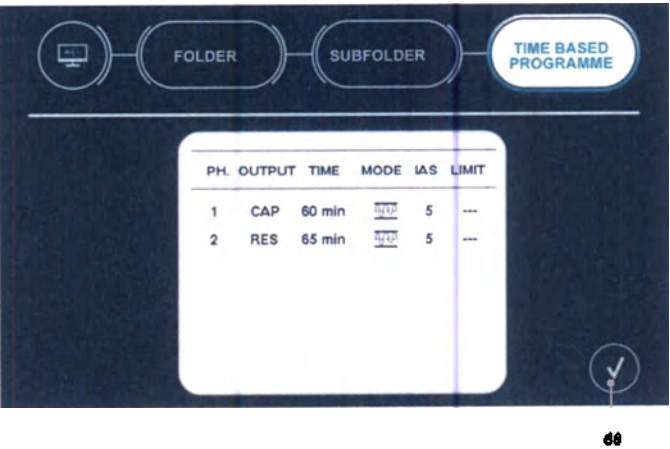

68. Downloading the program.

If the user made a mistake when choosing a program, he can return to the previous screen only using the navigation button (16).
When the button (68) is pressed, the program displays the screen of the selected procedure.

INDIBA PREPARED PROCEDURES

In the stored procedures (23) you can find the predefined procedures created by INDIBA. Such folders and / or programs are identified by the following icon:



Settings menu

Press the "Settings" button (17) to go to the settings menu.



You can use the buttons on this screen to:

- 69. Change the volume level of the device.
- 70. Change the sound emitted by the device when the button is pressed.
- 71. . Select a language.
- 72. . Turn off the control of the output power value or set the power limit value: from 5% to 30% (5% interval) and from 30% to 90% (10% interval).
- 73. Select a value (Ω or mA) to show its change during the procedure on the output current graph.
- 74. Change the channel number used for wireless communication with the control panel.
- 75. Change the heating time of the return flat electrode.
- 76. . Turn on or off the sound of contact detection.
- 77. . Decrease the value of the selected parameter.
- 78. Increase the value of the selected parameter.
- 79. Save the changes.

Monitoring program

The button of the monitoring program (18) enables or disables the wireless connection to the remote computer to transmit the values of the parameters measured by the device during the procedure.

Additional information on how the monitoring program works is given in Appendix 1.

MONITORING PROGRAM BUTTON INDICATOR COLOR DESIGNATION

The color of the button indicates the communication status. When the monitoring program icon:

- It is white and does not blink; the Wi-Fi connection is disconnected.
- White and blinking; Wi-Fi connection is on and waiting for data connection.
- It is blue and flashing; a data connection has been established, but data is not sent to the monitoring program.
- It is blue and does not blink, the connection is completed, and the device sends data for storage.

Flat return electrode heating

Note: This function is only available if the unit is mounted on a trolley rack. Before activating this function, the user must connect the device to the trolley rack using the connecting cable and make sure that the selected voltage value on the trolley rack matches the existing mains voltage.

The return plate heating button (19) is used to enable or disable the return plate heating.

The heating time can be changed in the "Settings" menu (17).

The color of the button indicates the status:


- White and does not blink - heating is off.
- Yellow and does not blink; heating is off.
- Yellow and flashing; heating will soon be turned off.

If you press the button during heating, the countdown will be interrupted.

Information on using the device

When you press the information button on the use of the device (20), a message appears on the screen with the following brief data:

- The number of procedures performed on the device.
- Total time of procedures performed on the device.
- Total time of procedures performed on the device in CAP mode.
- Total time of procedures performed on the unit in RES mode.
- The amount of time remaining until the next maintenance.

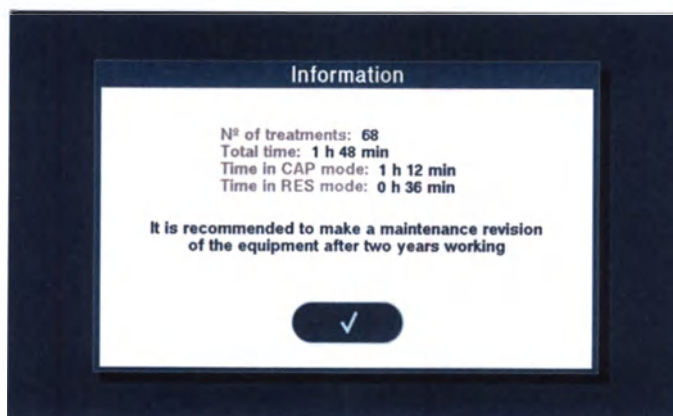

DEVICE USE BUTTON

The information button on the use of the device (20) indicates to the user when it is necessary to perform maintenance on the device.

- The button is white and does not blink. This means that there is still time until the next service date for the machine.
- The button is blue and does not blink. This means that the device must be serviced in the near future.
- The button is red and does not blink. This means that the service day of the device has already passed.

The user must contact their dealer or INDIBA customer support to service the machine.

Icons

During the procedure, the following yellow icons may flash at the bottom of the screen:




80. The selected output value cannot be reached because the resistance value detected by the device is too large.

81. The detected capacitive electrode is too large for this unit.

82. . This icon appears in capacitive mode (CAP) when the device adjusts its internal parameters to adapt to the detected electrode and optimize performance.

83. The device detected contact of the electrode with the patient.

If the device cannot detect the connection of the electrode handles, it will stop the procedure and display a pop-up message on the screen for the user:

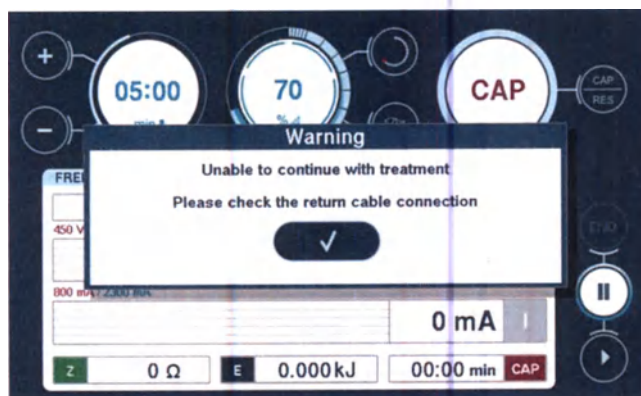

The user needs to check the cable connection indicated in the message.

REMOTE CONTROL

The control panel comes with one tablet battery. If the unit does not respond to the control panel, it may be necessary to replace the battery. Remove the battery from the control panel if it will not be used for a long time.



When the battery in the control panel runs out, a solid yellow icon appears on the display of the device.

84. The battery in the control panel is empty, it must be replaced as soon as possible. Follow these instructions to replace the battery:

- Remove the battery cover.
- Remove the discharged battery.
- Insert a new battery into the battery compartment.
- Replace the battery cover.
- Dispose of the old battery at a recycling point.

After the device has reached the end of its useful life, remove the battery from the control panel and return it to a recycling center for environmentally friendly disposal before disposing of it.



Product Elements

ELECTRODE TYPES

The following types of electrodes are used in the apparatus:

- Returnable
- Capacitive
- Resistive

RETURN ELECTRODES

Two types of electrodes act as a return electrode:


- Return cylindrical electrode.
- Return flat electrode.

A return flat electrode should be used when the diameter of the active electrode (capacitive or resistive) is greater than 40 mm. When using an active electrode (capacitive or resistive) with a smaller diameter, a flat or cylindrical return electrode can be used, depending on the patient's sensations, the area to be treated, etc.

Notes: It is necessary to use a return electrode (flat or cylindrical) so that the current can circulate.


The return flat electrode is flexible, allowing you to better adapt to the anatomy of the patient's body. However, the following bending limits of the return flat electrode must be considered:

- In the transverse direction (A), the return flat electrode cannot be bent more than 30° horizontally.
- In the longitudinal direction, the return flat electrode cannot be bent more than 90° provided that pressure is applied to the extreme parts of the return flat electrode (B).
- NEVER bend the return flat electrode in the longitudinal direction, applying pressure at points close to the bend line (C), as this will deform the return flat electrode for a long time, making it impossible to return to its original shape.

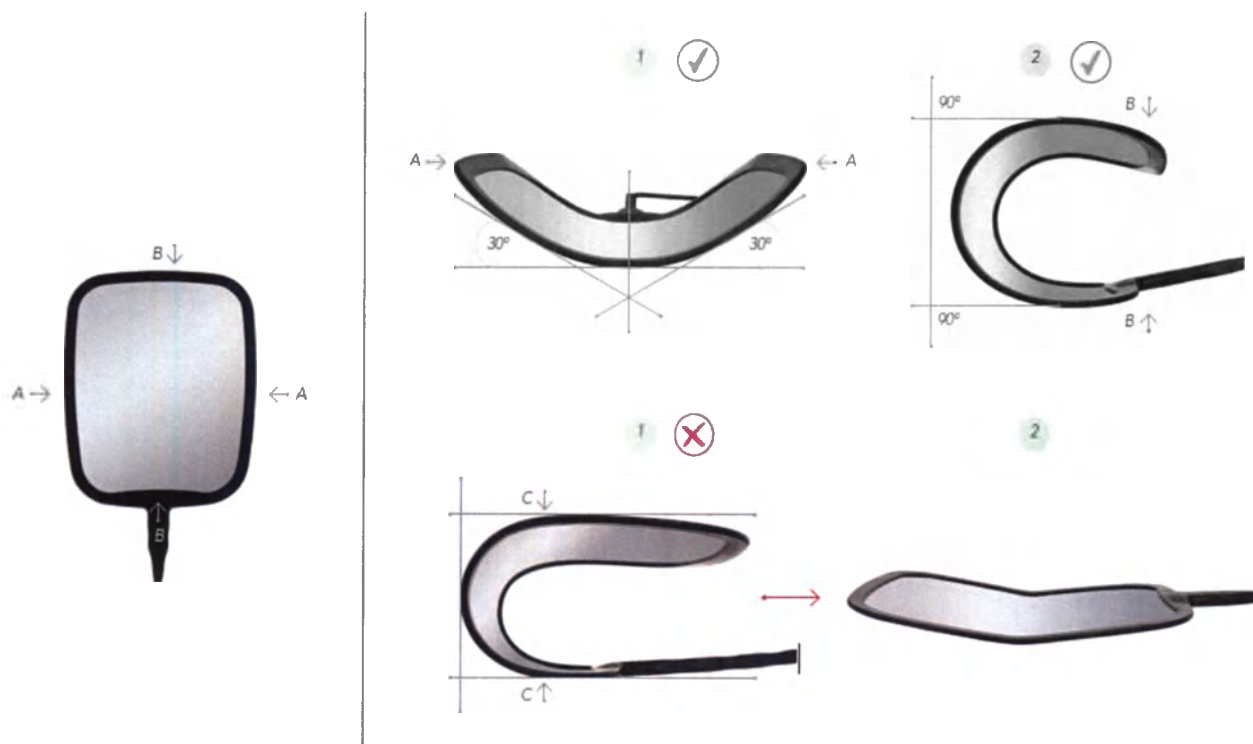

HANDLE FOR ELECTRODES CAP


Only capacitive electrodes with a shaft diameter of 3 mm and a groove on the shaft can be used in the product. This groove helps to fix the electrode in the required position on the electrode handle.

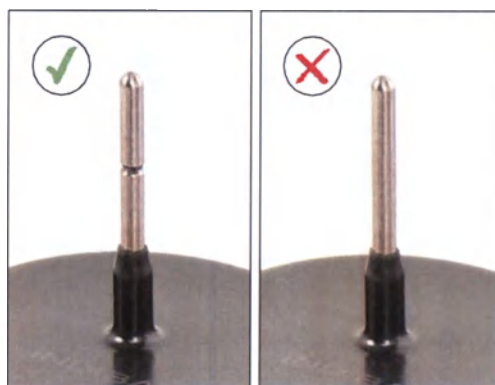

In Fig. Figures 1-4 show the steps of fixing a capacitive electrode on a handle for electrodes:


85. Insert the protective sleeve into the electrode handle.
86. Insert the electrode shaft into the hole until it stops.

1. Release the protective sleeve to return it to its original position.
2. Gently pull the electrode until you hear a click. This indicates that the groove on the shaft is correctly installed in the handle for the electrodes.

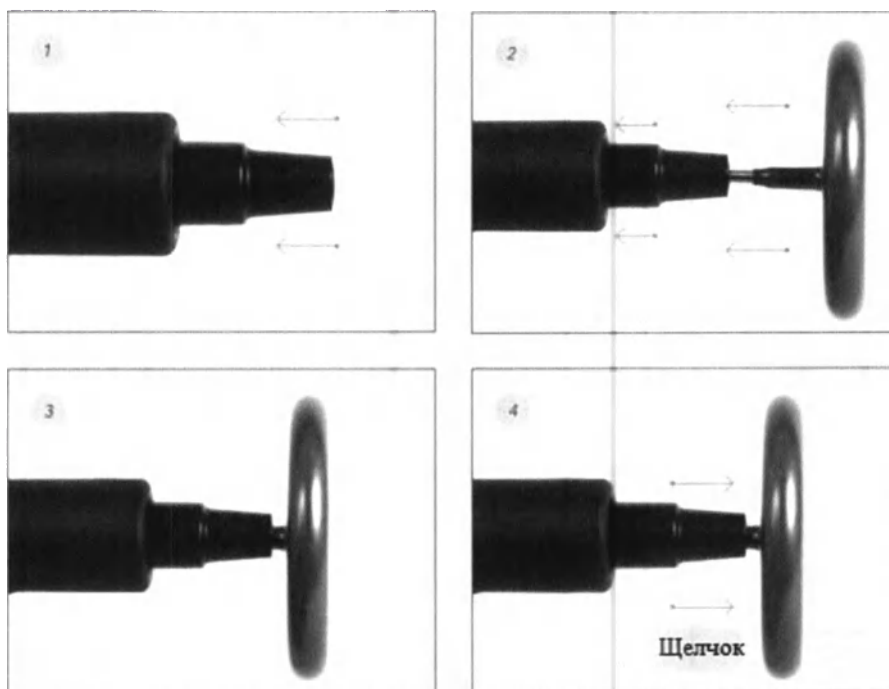

Figures 1-3 show the steps for removing a capacitive electrode from the electrode handle:

1. Insert the protective sleeve into the electrode handle.
2. Pull the capacitive electrode out of the electrode handle.
3. Release the protective sleeve to return it to its original position..

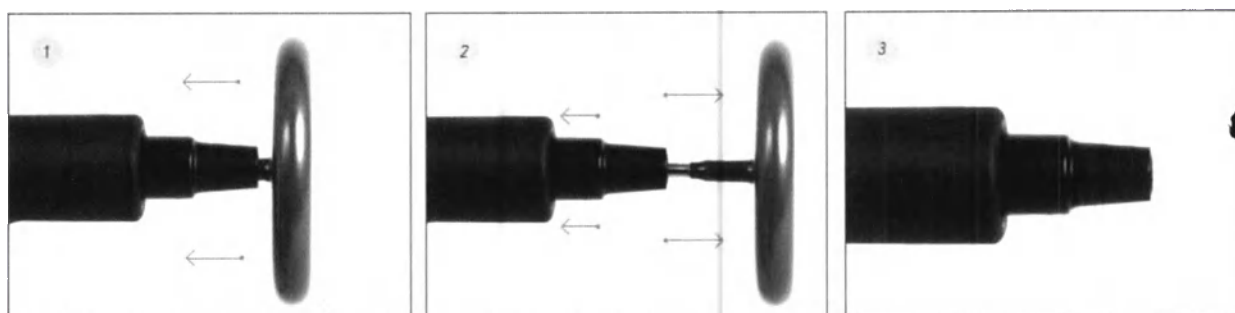

IMPORTANT: To insert, pull out or replace an electrode, the procedure must be paused. Do not start the procedure unless you hear a click indicating that the electrode is locked. Otherwise, the electrode may fall during the procedure and break.


HANDLE FOR RES ELECTRODES

Only resistive electrodes with a shaft with a diameter of 6 mm and a groove on the shaft can be used in the apparatus. This groove helps to fix the electrode in the required position on the electrode handle.




Figures 1-4 show the steps of fixing a resistive electrode on a handle for electrodes:

1. 1. Insert the protective sleeve into the electrode handle
2. 2. Insert the electrode shaft into the hole until it stops.
3. 3. Release the protective sleeve to return it to its original position.
4. 4. Gently pull the electrode until you hear a click. This indicates that the groove on the shaft is correctly installed in the handle for the electrodes.

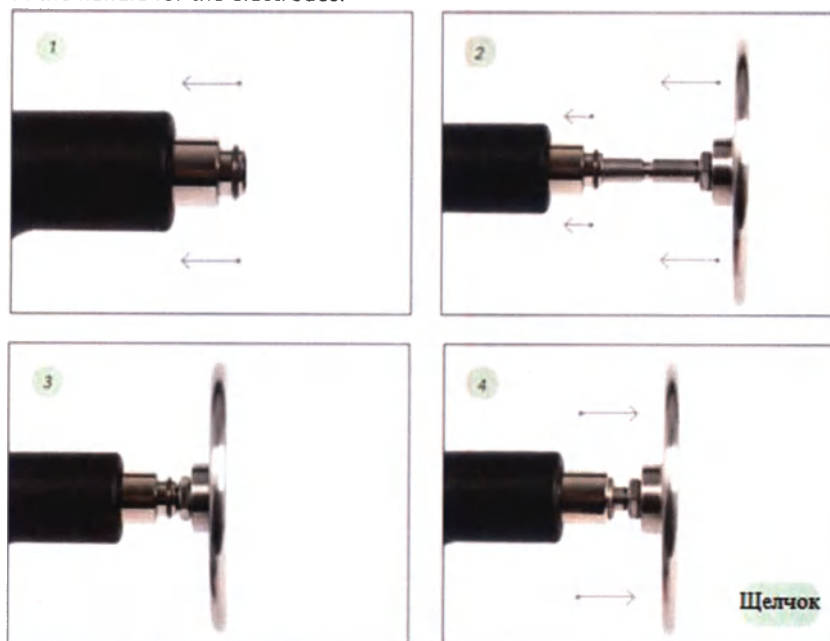

In Fig. 1-3 shows the steps for removing a capacitive electrode from the handle for the electrode:

1. 1. Insert the protective sleeve into the electrode handle.
2. 2. Pull the resistive electrode out of the electrode handle.
3. 3. Release the protective sleeve to return it to its original position.

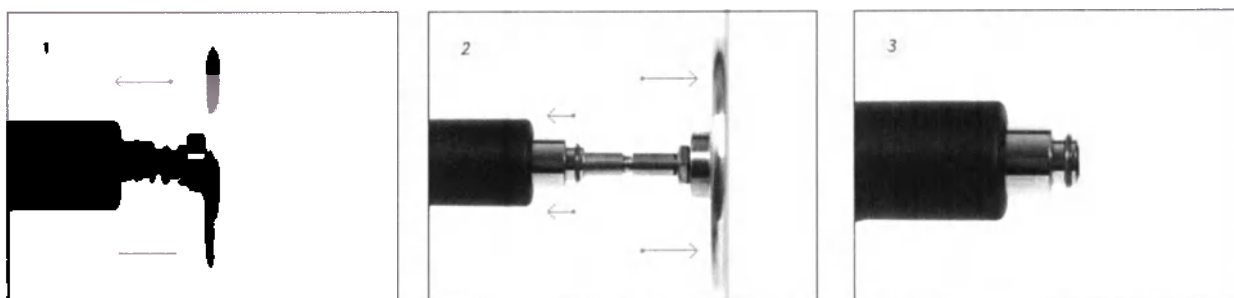

ВАЖНО: To insert, pull out or replace the electrode, the procedure must be put on PAUSE. Do not start the procedure unless you hear a click indicating that the electrode is locked. Otherwise, the electrode may fall during the procedure and break.

MANUAL


To start the procedure:

- Correctly fix the return electrode on the patient's body.
- Correctly install the active electrode on the electrode handle.
- Apply a conductive cream to the area of the patient's body to be treated and to the return electrode.



PLACING AN ACTIVE ELECTRODE AND RETURN ELECTRODE ON THE BODY OF THE PATIENT

The figure below shows the recommended placement of the active electrode and the return electrode based on which area of the body is to be processed.


1. Skin remodeling

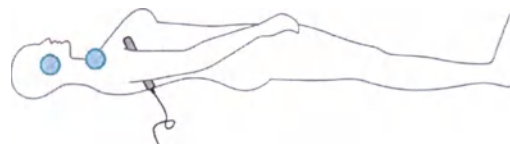

2. Body contouring

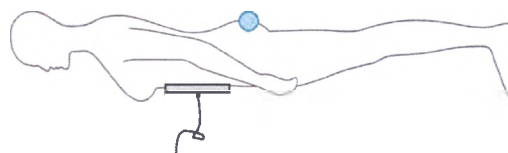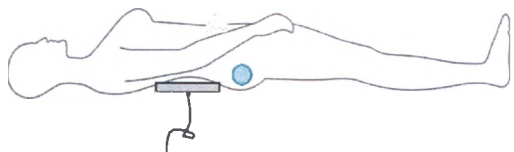


3. Anti-cellulite programs

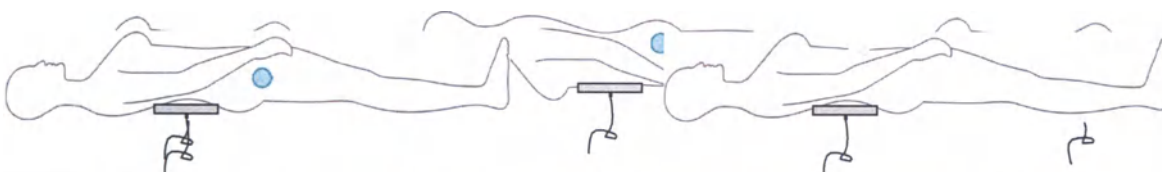


4. Postoperative recovery

Liposuction

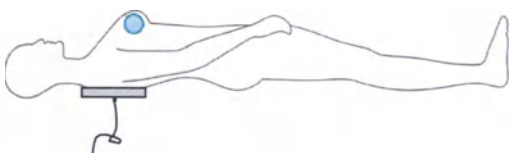

Abdominoplasty

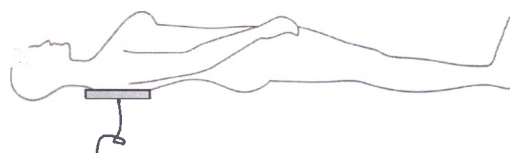

Mammoplasty

Face lift


IMPORTANT: Never use the unit if the return electrode has not been properly fixed. Failure to do so may result in burns to the patient.

IMPORTANT: Do not use electrodes on the patient's body until you have fully studied this instruction manual and completed the training course provided by the manufacturer when purchasing the device.

GUIDELINES FOR USING ACTIVE ELECTRODES


Capacitive Electrodes (CAP)

The electrode should always come in contact with the skin. During the procedure, the electrode should move. Use circular, linear, or both movements in accordance with recommendations or treatment protocols.

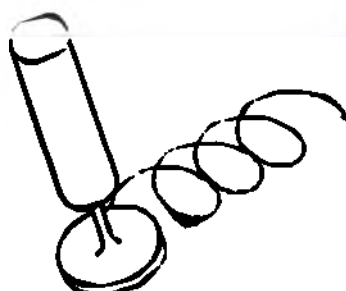

Apply moderate pressure and move forward in a wide circular motion.

The electrode should fit snugly against the skin. Using the electrode at an angle at which only partial contact with the skin is observed can cause premature wear of the edges of the electrode, increase the risk of burns and reduce the effectiveness of the procedure.

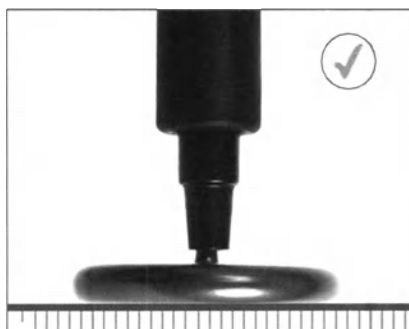

Capacitive electrode (CAP).

Д To obtain optimal treatment results, three key points must be observed:

Pressure

The applied pressure should be more or less the same as if using a large eraser. Under these conditions, the minimum electrical resistance is observed and the best physical contact is ensured.

Speed

In each circle, the electrode should move a distance equal to 50% of its diameter. The electrode should move continuously at a speed of approximately one rotation per second.

Temperature

Choose a comfortable procedure temperature. The patient should feel warm, but this sensation should not cause discomfort.

The ratio of the diameter of the capacitive electrode (CAP) to the minimum and maximum effective time of the procedure for an area of 100 cm².

Diameter (mm)	Min time (min)	Max. time (min)
30	10	20
40	5	10
55	2:30	5
65	1:30	3
80	1	2

The duration shown is approximate. The exact value is selected.

This table shows the relationship between the diameter of capacitive electrodes (CAP) and the procedure time.

IMPORTANT: If damage to the capacitive electrode is detected, it must be replaced. Failure to do so may result in minor burns to the patient's skin.

Resistive Electrodes (RES)

The electrode should always come in contact with the skin. During the procedure, the electrode should move. Use circular, linear, or both movements in accordance with recommendations or treatment protocols.



Apply moderate pressure and move forward in a wide circular motion..

The electrode should fit snugly against the skin. Using the electrode at an angle at which only partial contact with the skin is observed can cause premature wear of the edges of the electrode, increase the risk of burns and reduce the effectiveness of the procedure.



Resistive electrode (RES).

To obtain optimal treatment results, three key points must be observed:

Pressure

The applied pressure should be more or less the same as if using a large eraser. Under these conditions, the minimum electrical resistance is observed and the best physical contact is ensured.

Speed

In each circle, the electrode should move a distance equal to 50% of its diameter. The electrode should move continuously at a speed of approximately one rotation per second.

Temperature

Choose a comfortable procedure temperature. The patient should feel warm, but this sensation should not cause discomfort.

NOTES

- Before starting the procedure in resistive mode, it is recommended that you first perform the procedure in capacitive mode.
- Procedure time: set at the discretion of the specialist, based on the parameters of the procedure and processing area. The duration of the procedure can vary from 20 minutes for procedures performed on the face, and up to 50 minutes for procedures performed on the body.
- The effectiveness of the procedure is determined by two main factors: the duration and level of output power.
- Hard hair must be removed from the treatment area.
- Resistive mode can sometimes cause internal discomfort to patients in the treatment area. Reduce the output to a level where the patient feels warm but not uncomfortable.

CABLE CONNECTIONS USER GUIDE

1. Cables should be stored separately from each other, take a natural path created by the weight of the cable itself.
2. Do not overtighten or bend the cables. Cables should not be entangled or twisted, as this can lead to premature damage.



3. Disconnect the cable from the device as shown in fig.

4. Do not pull the cable to disconnect it.

Ha causado el asiento n°
de mi Libro Indicador del año

97
2020

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

Electroconductive creams manufactured by INDIBA

Electroconductive creams manufactured by INDIBA were specially developed for devices manufactured by INDIBA.

Apply an electrically conductive cream to the skin of the treated area (layer thickness should be at least 1 mm). Add an electrically conductive cream during the procedure if you notice that it has lost its original properties.

Apply a conductive cream to the return electrode before starting the procedure.

INDIBA electrically conductive creams have two main benefits for the patient:

- They reduce the electrical resistance of the electrode-skin contact, thereby optimizing the flow of current through the body.
- They minimize friction between the skin and the electrode, allowing the electrode to glide smoothly over the skin. The package indicates the composition of the cream, batch and expiration date.

Product cleaning and disinfection

CLEANING THE UNIT

- Always keep the unit in good condition. Periodically clean it from dust and other impurities with a soft, slightly damp cloth. Do not allow water droplets to fall into the connectors of the unit. Do not use aggressive or oxidizing substances such as bleach or ammonia.

Cleaning and disinfection of active electrodes, return electrodes and electrode handles

Before and after each procedure

- Always clean active, return electrodes and electrode handles before and after each use.
- Use a lint-free cloth or towel to clean excess conductive cream from active electrodes, return electrodes, and electrode handles.
- Then, active, return electrodes and electrode handles must be disinfected with a disinfectant wipe suitable for non-invasive medical instruments, or a mild soap solution and water. Dry before use.
- It is recommended to use a new cloth to clean each item.

Capacitive (CAP) electrodes are not intended for sterilization. Sterilization can damage the coating.

After each use, the massage nozzle should be washed with soapy water and then dried..

When carrying out gynecological procedures:

Longitudinal electrode RES:

For individual use only. Clean the electrode twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 minutes, and then rinse with water.

Longitudinal CAP electrode:

For individual use only. Clean the electrode twice with soapy water. Disinfect the electrode handles and return electrodes using the equipment used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

Ha causado el aslento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY FE.
[Signature]

Repair and maintenance

Daily inspection

Before using the device, make sure that the return and active electrodes, electrode handles are in good condition: the case is intact, the cable coating is not damaged. Pay particular attention to the coating on the capacitive electrodes; it must not be damaged.

Do not use damaged or defective product elements. If repairs or replacements are necessary, contact the manufacturer or your authorized dealer.

Product repairs may only be carried out by authorized specialists or service centers. Contact the manufacturer for information on the nearest authorized service center.

Periodic inspections by a service engineer should be carried out at least once every two years.

IMPORTANT: If any defect or malfunction is detected, DO NOT use this product, but notify a qualified technician. To avoid electric shock, DO NOT disassemble this product by yourself.

Marking and packaging

Marking

Marking of product elements may contain the following applicable parameters, symbols and designations:

Product name;
 Name of product item;
 Input electrical parameters: voltage, frequency of power supply, power;
 Class of protection against electric shock;
 Parameters of electromagnetic compatibility; Information about the authorized representative of the manufacturer in the Russian Federation;
 Parameters of electromagnetic compatibility; Information about the authorized representative of the manufacturer in the Russian Federation;
 Fuse information;
 Output data: power output in CAP and RES mode, frequency



Symbol "Serial number" with the serial number;



Symbol "Catalog number" indicating the catalog number;



The "Use To" symbol. Indicates the date after which the product should not be used;



Symbol "Part Number". Indicates the medical device number according to the manufacturer's catalog;



Symbol "Date of manufacture" indicating the date of manufacture;



Symbol "Information about the manufacturer" with the name of the manufacturer and address (optional: telephone and fax);



Symbol "Working parts of type BF without protection against defibrillator discharge";



Symbol "WEEE directive - Do not dispose of as normal household waste";



Symbol "CE mark of conformity" with (or without) indicating the number of the notifying authority;



Without the use of parabens;



Refer to the product manual;



After use, the packaging should be thrown into the bin;



Product packaging is made of plastic and is amenable to industrial processing;



Shelf life after opening the package;

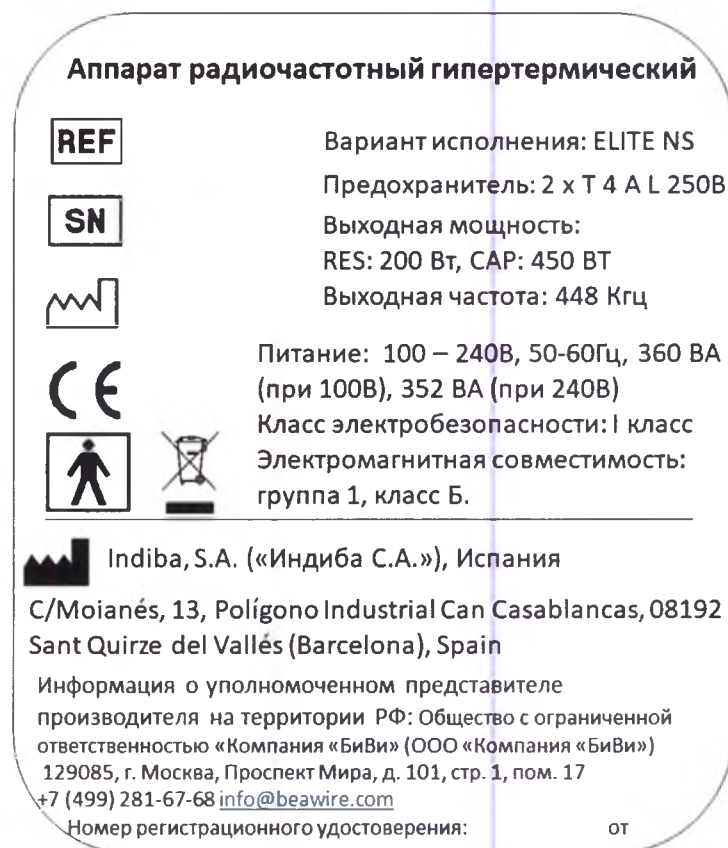


Fig. 45 Design of marking the main ELITE NS unit (for the main RGN unit - similarly)

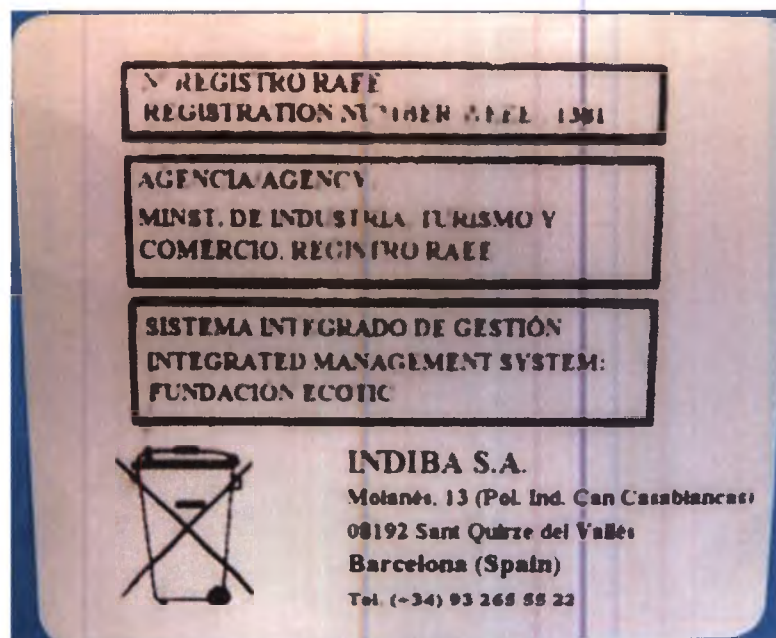


Fig. 46 Additional marking of the device, not applicable for Russia

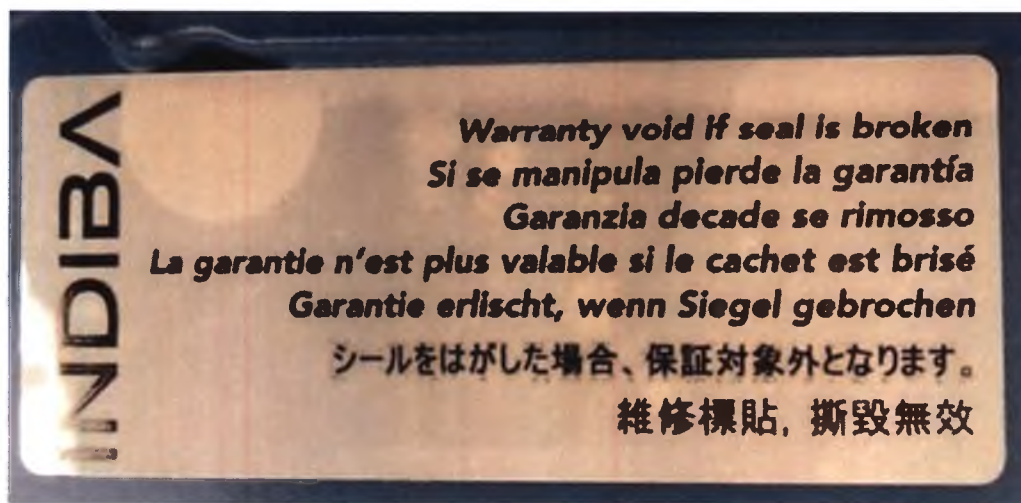


Fig. 47 Warranty seal of the device "Warranty is void if the seal is damaged"

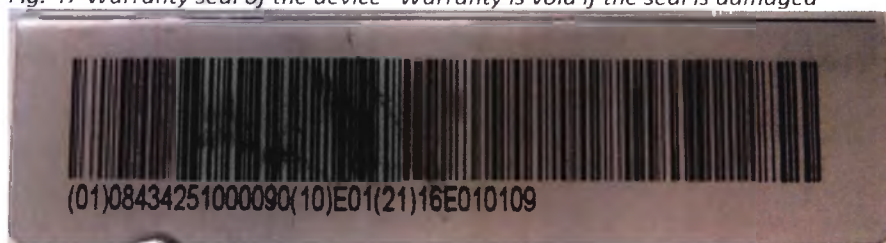


Fig. 48 Marking on the back of the machine containing a unique product identification number

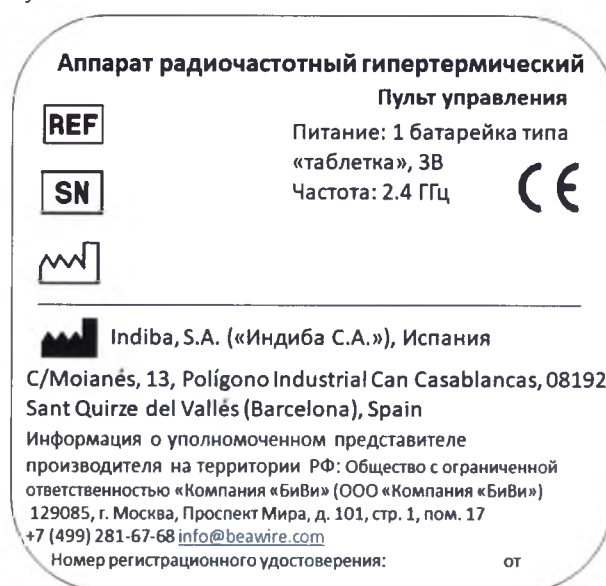


Fig. 49 Remote control labeling project



Fig. 50 Marking in the packaging of the apparatus on the procedure for removing the product from packaging



Аппарат радиочастотный гипертермический

Элемент изделия:

крем электропроводящий Anticellulite Cream

Электропроводящий крем для проведения процедур в емкостном и резистивном режимах.

Для профессионального использования. 1000 мл

Инструкция: нанесите на участок тела, на котором будет проводиться процедура, достаточное количество крема электропроводящего, таким образом, чтобы толщина нанесенного слоя была не менее 1 мм. Во время процедуры добавьте еще некоторое количество крема электропроводящего, если не наблюдается первоначальной гладкости и его плотность возросла, создавая трудности для манипуляций. После проведения процедуры удалите оставшийся электропроводящий крем.

Предупреждение: крема электропроводящие производства компании Индиба С.А. созданы и протестированы для использования совместно с Аппаратом радиочастотным гипертермическим.

Использование кремов электропроводящих сторонних производителей нарушает гарантию на изделие и может нанести вред пациенту.

Состав: Вода, ПЭГ-6 стеарат, пропиленгликоль, минеральное масло, гидрогенизированное пальмовое/пальмоядровое масло ПЭГ-6 эстерс, каприлик/каприловый триглицерид, глицерил стеарат, полиэтиленгликоль-32 стеарат, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-75 ланолин, фукуса пузырчатый экстракт, пропиленгликоль, экстракт гуггула, форсколин, экстракт каштана конского, отдушка, бензиловый спирт, триэтаноламин, салициловая кислота, глицерин, сорбиновая кислота



Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания

C/Moianès, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Spain

Информация о уполномоченном представителе производителя на территории РФ: Общество с

ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от

Fig. 52 Additional labeling of Anticellulite Cream for Russian user



INGREDIENTS
INGREDIENTES
COMPOSITION
INGREDIENTI
INGREDIENTES
INHALTSSTOFFE
INGREDIENTEN

成分
원료

Aqua
PEG-6 Stearate
Paraffinum liquidum
Hydrogenated Palm/palm kernel oil PEG-6 esters
Caprylic/capric Triglyceride
Glycol Stearate
PEG-32 Stearate
Sodium Sulphate
PEG-75 Lanolin
Benzyl Alcohol
Triethanolamine
Salicylic Acid
Glycenn
Sorbic Acid

CA INSTRUCTIONS FOR USE: Apply to the area to be treated by spreading a sufficient amount of cream so that the average thickness deposited on the skin is not less than 1 mm. Add more cream during the treatment when it is noticed that it no longer has its initial smoothness and its density increases, making hand movements difficult. Remove the remaining cream after treatment.

WARNING: Only Proionic Creams have been designed and tested for use with INDIBA Proionic Systems.

Use of other gels or creams invalidates the warranty of the equipment and may cause harm to the person under treatment.

SP INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar sobre el área a tratar esparciendo la suficiente cantidad de crema de forma que el grosor medio que se deposite sobre la piel no sea inferior a 1 mm. Añadir más crema durante el tratamiento cuando se advierte que esta ya no tiene la suavidad inicial y su densidad aumenta dificultando el movimiento manual. Retirar el exceso de crema tras el tratamiento.

ADVERTENCIA: Sólo las Cremas Proionic han sido diseñadas y verificadas para su uso con los equipos INDIBA Proionic Systems.

El uso de otros geles o cremas invalida la garantía del equipo, y su uso puede causar daño a la persona bajo tratamiento.

FR MODE D'EMPLOI : Appliquer en étalant sur la zone à traiter une quantité suffisante de crème pour obtenir une épaisseur moyenne de produit sur la peau d'au moins 1 mm. Ajouter de la crème au cours du traitement si elle s'épaissit et gêne l'intervention manuelle. Retirer l'excès de crème après le traitement.

AVERTISSEMENT : Seules les crèmes Proionic ont été élaborées et contrôlées pour être utilisées avec le matériel INDIBA Proionic Systems.

L'utilisation d'autres gels ou crèmes annule la garantie du matériel et peut nuire à la santé de la personne traitée.

Copyright © 2015 Indiba S.A. All rights reserved. Made in Spain

IT ISTRUZIONI PER L'USO: Applicare sull'area da trattare stendendo una quantità sufficiente di crema, in modo che la spessore medio depositato sulla pelle non sia inferiore a 1 mm. Aggiungere altra crema durante il trattamento quando si nota che non ha più la morbidezza iniziale e la sua densità aumenta, rendendo difficili i movimenti della mano. Eliminare la crema in eccesso dopo il trattamento.

AVVERTENZA: Solo le creme Proionic sono state studiate e collaudate per l'uso con l'apparecchiatura INDIBA Proionic Systems.

L'uso di gel o creme di altro tipo rende nulla la garanzia dell'apparecchiatura, e il loro utilizzo può causare danni alla persona in trattamento.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Aplicar sobre a área a cuidar espalhando uma quantidade suficiente de creme de forma a que a espessura média depositada sobre a pele não seja inferior a 1 mm. Adicionar mais creme durante o cuidado quando se considerar que já não existe a liberdade inicial e que a densidade está a aumentar dificultando o movimento manual. Retirar o excesso de creme depois do cuidado.

ADVERTÊNCIA: Apenas os cremes Proionic foram concebidos e verificados para utilização em conjunto com os equipamentos INDIBA Proionic Systems.

A utilização de outros géis ou cremes invalida a garantia do equipamento, e sua utilização pode causar danos a pessoa em cuidado. Não utilizar em crianças.

DE ANWENDUNGSHINWEISE: Wenden Sie die Creme in ausreichender Menge auf die zu behandelnde Körperstelle an, sodass die durchschnittliche Dicke auf der Haut nicht weniger als 1 mm beträgt. Tragen Sie während der Behandlung mehr Creme auf, wenn Sie bemerken, dass die Creme nicht mehr so gleichförmig wie zu Beginn ist und die Dichte zunimmt, wodurch die Handbewegungen erschwert werden. Überschüssige Creme nach der Behandlung entfernen.

HINWEIS: Nur die Cremes der Reihe Proionic wurden zur Verwendung mit den Geräten der Reihe INDIBA Proionic Systems entwickelt und getestet. Die Verwendung anderer Gele oder Cremes wird die Garantie für Ihr Gerät erlöschen, und diese Verwendung kann der behandelten Person Schaden zufügen.

NL GEBRUIKSIJSTRUCTIES: Breng de crème aan op het te behandelen oppervlak door een voldoende hoeveelheid crème uit te smeren, zodat de gemiddelde dikte van de laag die is aangebracht op de huid niet minder dan 1 mm bedraagt. Voeg tijdens de behandeling meer crème toe als blijkt dat deze niet langer glad en soepel is en de dichtheid ervan toeneemt, waardoor handbewegingen moeilijk worden. Verwijder overtollige crème na behandeling.

WAARSCHUWING: Alleen Proionic cremes zijn ontworpen en getest voor gebruik met INDIBA Proionic Systems apparatuur.

Het gebruik van andere gels of cremes wordt maakt de garantie van de apparatuur ongeldig, en hun gebruik tot letsel bij de behandelende persoon kan leiden.

JP 使用法 肩或部位に適量を塗布してご使用下さい。所し電極にも少量のクリームを塗布してください。電極クリームが少なくなってきた場合は追加して塗布を続けてください。塗布時に適量クリームを除去してください。

成分: 水、ステアリン酸PEG-6、液体パラフィン、PEG-32、水素化パーム油、PEG-6エステル、辛酸/癸酸トリグリセリド、グリコールステアレート、PEG-75、羊毛脂、ベンジルアルコール、トリエタノールアミン、水楊酸、グリセリン、安息香酸。

注意: 本製品は INDIBA Proionic Systems 設備に使用する専用システム・アプリケーション用の専用クリームです。皮膚に合わないときはご使用を中止して下さい。

その他のジェル、またはクリームを使用した場合、保証を受けることができません。また、皮膚の損傷の原因となる可能性があります。ご注意ください。

輸入販売元: 株式会社インテック・ジャパン 〒700-0001 東京都港区新橋3-15-1 1F TEL: 03-5766-8871

KR 사용 안내 충분한 양의 크림을 치료 부위에 펴 바르십시오. 전극 하에 도포된 크림의 양은 두께가 1mm 이하가 되도록 합니다. 이 크림이 마르면 사용처에 연락하여 손의 움직임이 어렵게 되면 크림을 추가하십시오. 바른 후 남은 크림을 닦아내십시오. 경고 Proionic 크림 전용인 INDIBA Proionic Body Care Systems 에 사용하도록 테스트되었습니다. 다른 젤이나 크림을 사용하는 경우 장비에 대한 보증 사용의 법적 효력을 상실하게 되며 이로 인한 사용자의 해를 지킬 수도 있습니다.

Fig. 53 Original marking of conductive Face cream

Аппарат радиочастотный гипертермический

Элемент изделия:

крем электропроводящий Face Cream

Электропроводящий крем для проведения процедур в емкостном и резистивном режимах. Для профессионального использования. 1000 мл

Инструкция: нанесите на участок тела, на котором будет проводиться процедура, достаточное количество крема электропроводящего, таким образом, чтобы толщина нанесенного слоя была не менее 1 мм. Во время процедуры добавляйте еще некоторое количество крема электропроводящего, если не наблюдается первоначальной гладкости и его плотность возросла, создавая трудности для манипуляций. После проведения процедуры удалите оставшийся электропроводящий крем.

Предупреждение: крем электропроводящий производства компании Индиба С.А. созданы и протестированы для использования совместно с Аппаратом радиочастотным гипертермическим.

Использование кремов электропроводящих сторонних производителей нарушает гарантию на изделие и может нанести вред пациенту.

Состав: Вода, ПЭГ-6 стеарат, пропиленгликоль, минеральное масло, гидрогенизированное пальмовое/пальмоядровое масло ПЭГ-6 эстерс, каприлик/каприловый триглицерид, глицерил стеарат, полиэтиленгликоль-32 стеарат, лаурилсульфат натрия, ПЭГ-75 ланолин, бензиловый спирт, триэтаноламин, салициловая кислота, глицерин, сорбиновая кислота

 Indiba, S.A. («Индиба С.А.»), Испания

C/Moianès, 13, Polígono Industrial Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Spain

Информация о уполномоченном представителе производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Биви» (ООО «Компания «Биви»)

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от

Fig. 54 Additional labeling of conductive face cream for Russian user

INDIBA
PROIONIC CREAMS

INDIBA
PROIONIC CREAMS



CONDUCTIVE CREAM FOR
CAPACITIVE & RESISTIVE TREATMENT



1000 ml. e 35 fl oz



INGREDIENTS
INGREDIENTES
COMPOSITION
INGREDIENTI
INGREDIENTES
INHALTSSTOFFE
INGREDIËNTEN

成分 원료

Aqua
PEG-6 Stearate
Paraffinum liquidum
Hydrogenated Palm/palm kernel oil PEG-6 esters
Caprylic/capric Triglyceride
Glycol Stearate
PEG-32 Stearate
Sodium Sulphate
PEG-75 Lanolin
Parfûm
Benzyl Alcohol
Triethanolamine
Salicylic Acid
Glycerin
Sorbic Acid

Copyright 2015 Indiba S.A. All rights reserved. Made in Spain

GB INSTRUCTIONS FOR USE: Apply to the area to be treated by spreading a sufficient amount of cream so that the average thickness deposited on the skin is not less than 1 mm. Add more cream during the treatment when it is noticed that it no longer has its initial smoothness and its density increases, making hand movements difficult. Remove the remaining cream after treatment.

WARNING: Only Proionic creams have been designed and tested for use with INDIBA Proionic Systems.

Use of other gels or creams invalidates the warranty of the equipment and may cause harm to the patient.

SP INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar sobre el área a tratar esparciendo la suficiente cantidad de crema de forma que el grosor medio que se deposite sobre la piel no sea inferior a 1 mm. Añadir más crema durante el tratamiento cuando se advierte que esta ya no tiene la suavidad inicial y su densidad aumenta dificultando el movimiento manual. Retirar el exceso de crema tras el tratamiento.

ADVERTENCIA: Sólo las Cremas Proionic han sido diseñadas y verificadas para su uso con los equipos INDIBA Proionic Systems.

El uso de otros geles o cremas invalida la garantía del equipo, y su uso puede causar daño al paciente.

FR MODE D'EMPLOI : Appliquer en étalant sur la zone à traiter une quantité suffisante de crème pour obtenir une épaisseur moyenne de produit sur la peau d'au moins 1 mm. Ajouter de la crème au cours du traitement si elle s'épaissit et gêne l'intervention manuelle. Retirer l'excès de crème après le traitement.

AVERTISSEMENT : Seules les crèmes Proionic ont été élaborées et contrôlées pour être utilisées avec le matériel INDIBA Proionic Systems.

L'utilisation d'autres gels ou crèmes annule la garantie du matériel, et peut nuire à la santé de la patiente.

IT ISTRUZIONI PER L'USO: Applicare sull'area da trattare stendendo una quantità sufficiente di crema, in modo che lo spessore medio depositato sulla pelle non sia inferiore a 1 mm. Aggiungere altra crema durante il trattamento quando si nota che non ha più la morbidezza iniziale e la sua densità aumenta, rendendo difficili i movimenti della mano. Eliminare la crema in eccesso dopo il trattamento.

AVVERTENZA: Solo le creme Proionic sono state studiate e collaudate per l'uso con l'apparecchiatura INDIBA Proionic Systems.

L'uso di gel o creme di altro tipo rende nulla la garanzia dell'apparecchiatura, e il loro utilizzo può causare danni al paziente.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Aplicar sobre a área a tratar espalhando uma quantidade suficiente de creme de forma que a espessura média depositada sobre a pele não seja inferior a 1 mm. Adicionar mais creme durante o tratamento quando se considerar que já não existe a liberdade inicial e que a densidade está a aumentar dificultando o movimento manual. Retirar o excesso de creme depois do tratamento.

ADVERTÊNCIA: Apenas os cremes Proionic foram concebidos e verificados para utilização em conjunto com os equipamentos INDIBA Proionic Systems.

A utilização de outros geles ou cremes invalida a garantia do equipamento, e sua utilização pode causar danos ao paciente.

DE ANWENDUNGSHINWEISE: Wenden Sie die Creme in ausreichender Menge auf die zu behandelnde Körperstelle an, sodass die durchschnittliche Dicke auf der Haut nicht weniger als 1 mm beträgt. Tragen Sie während der Behandlung mehr Creme auf, wenn Sie bemerken, dass die Creme nicht mehr so gleitfähig wie zu Beginn ist und die Dichte zunimmt, wodurch die Handbewegungen erschwert werden. Überschüssige Creme nach der Behandlung entfernen.

HINWEIS: Nur die Cremes der Reihe Proionic, wurden zur Verwendung mit den Geräten der Reihe INDIBA Proionic Systems entwickelt und getestet. Die Verwendung anderer Gele oder Cremes wird die Garantie für Ihr Gerät erlöschen, und diese Verwendung kann dem Patient Schaden zufügen.

NL GEBRUIKSIJNSTRUCTIES: Breng de creme aan op het te behandelen oppervlak door een voldoende hoeveelheid creme uit te smeren, zodat de gemiddelde dikte van de laag die is aangebracht op de huid niet minder dan 1 mm bedraagt. Voeg tijdens de behandeling meer creme toe als blijkt dat deze niet langer glad en soepel is en de dichtheid ervan toeneemt, waardoor handbewegingen moeilijk worden. Verwijder overtollige creme na behandeling.

WAARSCHUWING: Alleen Proionic -cremes zijn ontworpen en getest voor gebruik met INDIBA Proionic Systems -apparatuur.

Het gebruik van andere geels of cremes wordt maakt de garantie van de apparatuur ongeldig, en hun gebruik tot letsel bij de patient kan leiden.

한국어 사용설명서
본 제품은 INDIBA Proionic System의 전극과 함께 사용하는 의료용 크림입니다. 사용 시 전극과 크림을 잘 혼합하여 사용해야 합니다.
사용 방법: 전극을 피부에 부착한 후, 크림을 전극과 피부 사이에 골고루 바르십시오. 크림이 두꺼워지면 더 많은 크림을 추가하십시오.
주의: 본 제품은 INDIBA Proionic System의 전극과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다른 종류의 크림을 사용하면 전극의 성능이 저하될 수 있으며, 이는 전극의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
입력: 1000ml
TEL: 03-6768-8871

한국어 사용설명서
본 제품은 INDIBA Proionic System의 전극과 함께 사용하는 의료용 크림입니다. 사용 시 전극과 크림을 잘 혼합하여 사용해야 합니다.
사용 방법: 전극을 피부에 부착한 후, 크림을 전극과 피부 사이에 골고루 바르십시오. 크림이 두꺼워지면 더 많은 크림을 추가하십시오.
주의: 본 제품은 INDIBA Proionic System의 전극과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다른 종류의 크림을 사용하면 전극의 성능이 저하될 수 있으며, 이는 전극의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
입력: 1000ml
TEL: 03-6768-8871

Fig. 55 Original marking of conductive Care Cream

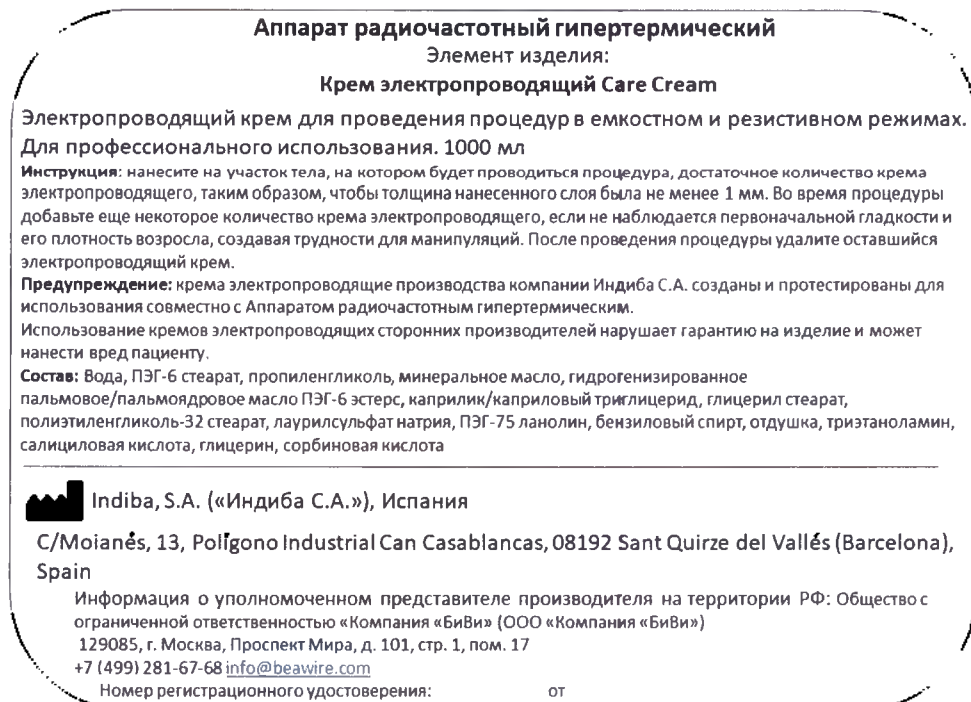


Fig. 56 Additional marking of cream of electrically conductive Care Cream for a Russian-speaking user

Packaging

The main unit is delivered in a cardboard box measuring 590mm * 610mm * 380mm, ± 10 mm. When it is opened, the user will see an explanatory marking with information on the correct removal of the device from the shipping container. Also, a sheet of foamed polyethylene is placed on top as an additional protection.



Fig. 57 Transport packaging of the main unit

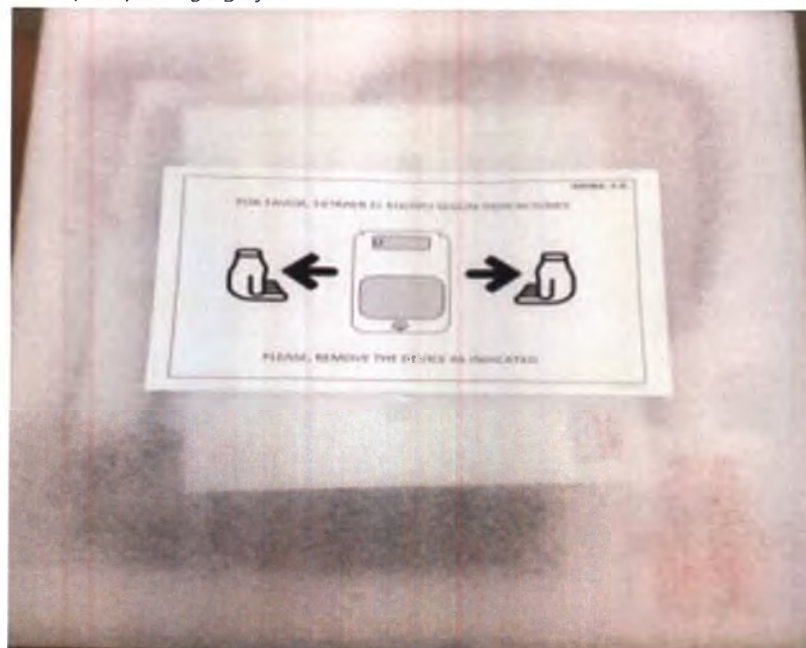


Fig. 58 Explanatory marking on the correct removal of the device from the packaging

When removing the protective sheet of foamed polyethylene, the user will see elements of the composition of the product, each of which is in its cell form of foamed polyethylene.



Fig. 59 Product elements (active electrodes (RES and CAP) are under the return flat electrode)

After extracting the form with the elements of the product, the user will find the main unit in a non-woven bag, which is equipped with shock protection from foamed polyethylene.

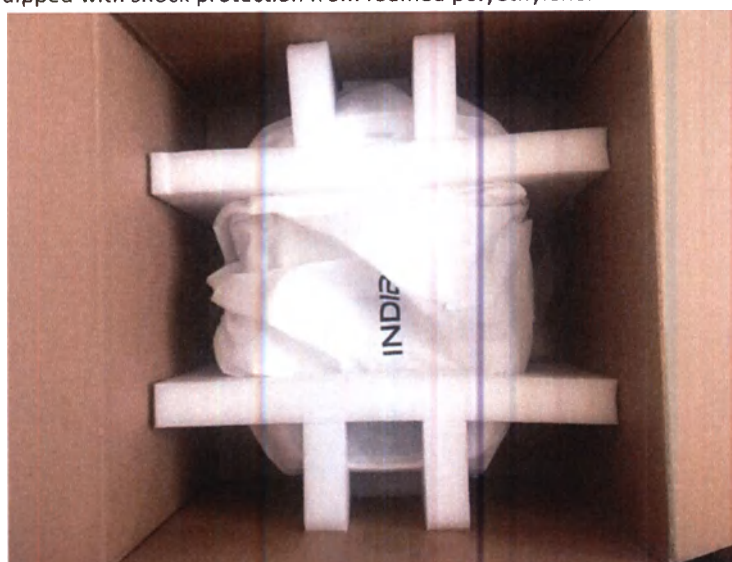


Fig. 60 Packing the main unit



Fig. 61 Marking of the transport packaging of the device using an example of an embodiment Radio-frequency hyperthermic device ELITE NS (for another embodiment - similarly). The marking indicates that the product is fragile (FRAGILE), as well as that made in Spain (made in Spain).

The trolley is delivered in a cardboard box measuring 600mm * 400mm * 900mm, ± 10 mm, tied with packing tape.



Fig. 62 Transport packaging rack trolley

When opening the transport packaging, the user will find a trolley-rack in a plastic case, on the edges of which a foam polyethylene is worn to protect it from shock. The trolley stands on a wooden frame.

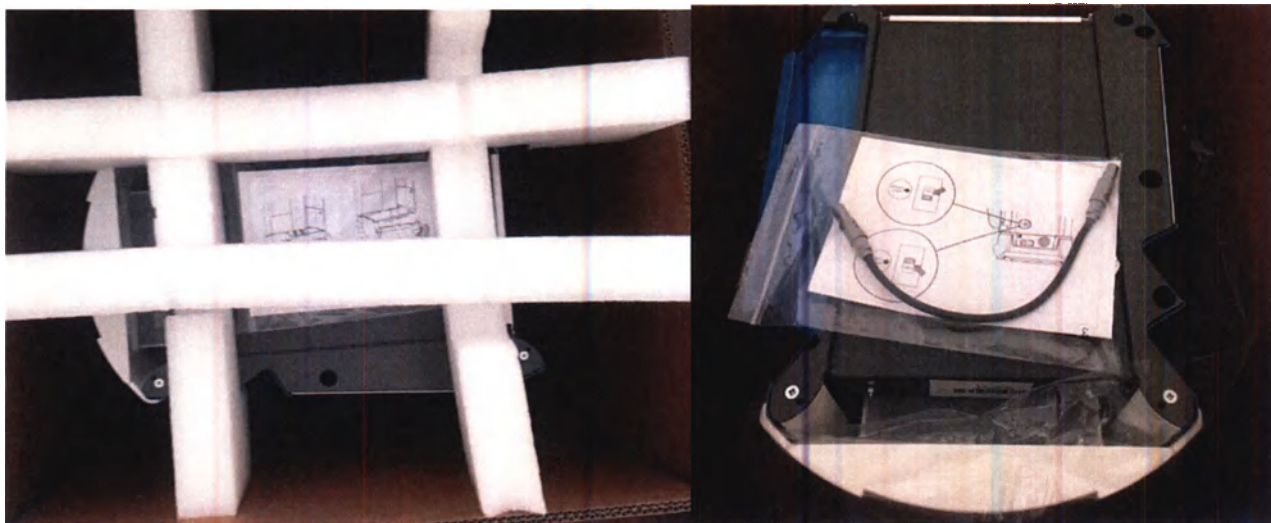


Fig. 63 Trolley rack with protection from foamed polyethylene, together with the trolley rack graphic material is supplied for turning on and installing the device, a connecting cable and keys for drawers of the trolley rack.

The electrically conductive cream is delivered sealed in a plastic film and a protective cap on the nose:

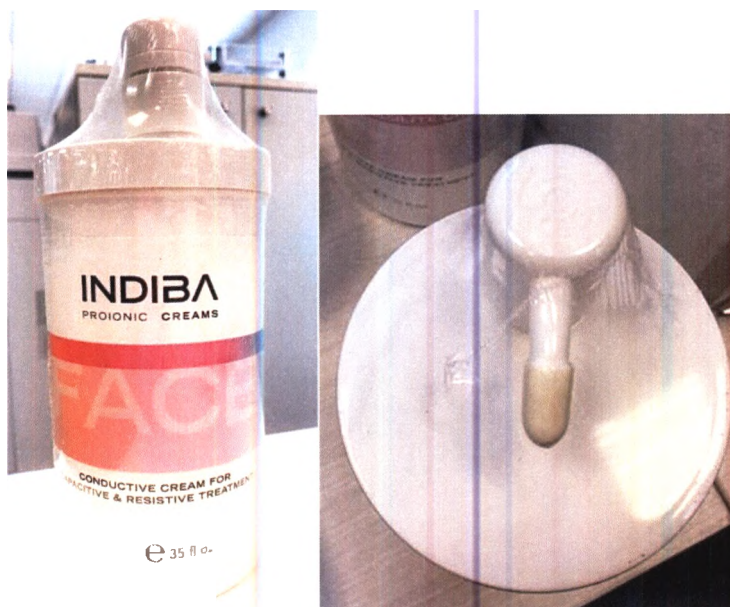


Fig. 64 Conductive Face Cream packed in plastic wrap

Conductive creams can be delivered in a separate transport package of 420mm * 330mm * 250mm $\pm$ 10mm in size or in a transport package of the Welcome Pack:



Fig. 65 Transport packaging cream electrically conductive

Welcome Pack comes in a separate cardboard box measuring 331mm * 365mm * 280mm $\pm$ 10mm. Inside are filled with air-filled plastic bags for protection against shock and damage. This box contains electrically conductive creams (if there is no transport packaging for electrically conductive creams), a bag for electrodes, as well as a separate box with magnetic locks measuring 258mm * 60mm * 295mm $\pm$ 10mm, which contains massage nozzles and a USB drive.



Fig. 66 Welcome Pack Transport Package





Fig. 67 Packing massage tips and a USB stick in a separate box. Graphic material with instructions for installing the massage nozzle is also embedded inside

The PACK GINECO-AESTHETICS kit is supplied in a separate box with magnetic locks (similar to the box described above with the Welcome Pack). This box is placed in a shipping cardboard box measuring 163mm * 423mm * 325mm $\pm$ 10mm.



Fig. 68 Transport packaging for the PACK GINECO-AESTHETICS kit (left) and consumer packaging for the PACK GINECO-AESTHETICS kit (right)

The following designations of the conditions of transportation and storage are available on transport containers:



Top

Fragile, handle with care

Keep away from moisture

Marking of product shipping containers contains:

- Product name;
- Model (option);

and the following characters:



Symbol "Serial number" with the serial number;



Symbol "Date of manufacture" indicating the date of manufacture;



Symbol "Information about the manufacturer" (indicating the name of the manufacturer and address).

Technical details

PRODUCT CLASSIFICATION

The product is classified in accordance with international standards and relates to medical electrical equipment with the following characteristics:

- Product electrical safety class: I electrical safety class
- Electromagnetic compatibility: group I, class B
- Type of protection of the working part against leakage currents: working part type BF
- Degree of protection of a cover: IPX0
- Sterilization method: not applicable
- Protection against fire hazards of flammable mixtures of anesthetics with air or with oxygen, or nitrous oxide: no
- Operating mode: long
- Estimated Life: 5 years
- Embedded software: V1.09 from 05/02/2018
- Risk class of firmware: A
- Monitoring program: 0.5R0 of 04/19/2016
- Risk class of firmware: A

COMPLIANCE WITH STANDARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION

- GOST ISO 13485-2011 Medical devices. Quality Management Systems. Regulatory system requirements
- GOST ISO 14971-2011 Medical devices. Application of risk management to medical devices
- GOST R ISO 15223-1-2014 Medical devices. Symbols used for labeling on medical devices, labels and accompanying documentation. Part 1. Basic requirements
- GOST R IEC 60601-1-2010 Medical electrical equipment. Part 1. General safety requirements taking into account the basic functional characteristics
- GOST R IEC 60601-1-2-2014 Medical electrical equipment. Part 1-2. General safety requirements, taking into account the basic functional characteristics. Parallel standard. Electromagnetic compatibility. Requirements and Tests
- GOST R 50444-92 Medical devices, apparatus and equipment. General specifications
- GOST R IEC 60601-1-6-2014 Medical electrical equipment. Part 1-6. General safety requirements, taking into account the basic functional characteristics. Additional standard. Serviceability
- GOST R IEC 62304-2013 Medical devices. Software. Life cycle processes
- GOST R ISO / IEC 9126-93 Information technology. Evaluation of software products. Quality characteristics and guidelines for their use
- GOST 28195-89 Software Quality Assessment. General Provisions
- GOST R 51188-98 Information Security. Testing software for computer viruses. Sample manual
- GOST R ISO / IEC 12119-2000 "Information technology. Software packages. Quality Requirements and Testing

- • GOST 31214-2016 Medical devices. Requirements for samples and documentation provided for toxicological, sanitary and chemical tests, sterility and pyrogenicity tests
- • GOST R 52770-2016 Medical devices. Safety requirements. Methods of sanitary-chemical and toxicological tests
- • GOST ISO 10993-1-2011 Medical devices. Assessment of the biological effects of medical devices. Part 1. Assessment and research
- • GOST R ISO 10993-2-2009 Medical devices. Assessment of the biological effects of medical devices. Part 2. Animal Handling Requirements
- • GOST ISO 10993-5-2011 Medical devices. Assessment of the biological effects of medical devices. Part 5. Cytotoxicity assay: invitro methods
- • GOST ISO 10993-10-2011 Medical devices. Assessment of the biological effects of medical devices. Part 10. Studies of irritating and sensitizing effects
- • GOST ISO 10993-12-2015 Medical devices. Assessment of the biological effects of medical devices. Part 12. Sample preparation and control samples
- • GOST 31209-2003 Containers for blood and its components. Chemical and biological safety requirements and test methods
- • MUK 4.1.742-99 Inverse voltammetric measurement of the concentration of zinc, cadmium, lead and copper ions in water
- • GOST 4011-72 Drinking water. Methods for measuring the mass concentration of total iron (with Changes N 1, 2)
- • MUK 4.1.3166-14 Gas chromatographic determination of hexane, heptane, acetaldehyde, acetone, methyl acetate, ethyl acetate, methanol, isopropanol, acrylonitrile, n-propanol, n-propyl acetate, butyl acetate, isobutanol, n-butanol, benzene, toluene, ethyl , m-, o- and p-xylenes, isopropylbenzene, styrene, α -methylstyrene in water and aqueous extracts from materials of various compositions
- • MP 1849-78 Guidelines for the determination of formaldehyde in aqueous extracts and model environments
- • I-880-71 Instruction for the sanitary-chemical research of products made from polymeric and other synthetic materials intended for contact with food products "(ethylene glycol)
- • GOST 31866-2012 Drinking water. Determination of element content by inversion voltammetry
- • GOST 31870-2012 Drinking water. Determination of element content by atomic spectrometry methods (as amended)
- • GN 2.3.3.972-00 Maximum allowable amounts of chemicals released from materials in contact with food
- • MUK 4.1.3169-14 Gas chromatographic determination of dimethyl phthalate, dimethyl terephthalate, diethyl phthalate, dibutyl phthalate, butyl benzyl phthalate, bis (2-ethylhexyl) phthalate and dioctyl phthalate in water and aqueous extracts from materials of various compositions
- • MP 1503-76 Guidelines for the determination of hexamethylene diamine in water during sanitary-chemical studies of polymeric materials used in the food and textile industries
- • MUK 4.1.647-96 Guidelines for the gas chromatographic determination of phenol in water

TRANSPORTATION, STORAGE, OPERATION.

Terms of Use:

- Air temperature: + 10 ° C to + 40 ° C.
(for longitudinal electrode RES and longitudinal electrode CAP, air temperature is from +10 ° C to +42 ° C)
- Relative humidity: 30% - 75%.
- Atmospheric pressure: 70 kPa - 106 kPa.

[Handwritten signature]

Transportation and storage conditions:

- Air temperature: -20 °C - +50 °C.
- Relative humidity: 10% - 100%, non-condensing.
- Atmospheric pressure: 50 kPa - 106 kPa.

Before turning on the device, wait until its temperature becomes equal to room temperature.

WEIGHT-DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Item	Parameter	Value
Block main ELITE NS	Weight, kg, $\pm 1\%$	8.6
	Size, mm, $\pm 1\%$	400x530x150
Main RGN Block	Weight, kg, $\pm 1\%$	8.4
	Size, mm, $\pm 1\%$	400x530x150
Trolley	Weight, kg, $\pm 1\%$	37.72
	Size, mm, $\pm 1\%$	445x325x905
Connecting cable	Weight, kg, $\pm 10\%$	With open drawers, the width increases to 740 mm
	Wire length, mm, $\pm 5\%$	0,025
	Connector Diameter, mm, $\pm 5\%$	315
Shielded power cable	Weight, kg, $\pm 1\%$	nineteen
	Wire length, mm, $\pm 1\%$	0.223
	Wire diameter, mm, $\pm 5\%$	3000
Key	Weight, kg, ± 0.001 kg	5.5
	Size, mm, ± 1 mm	0.007
Curved handle for RES electrode	Weight, kg, $\pm 1\%$	40x23x2
	Size, mm, $\pm 1\%$	0.253
	Wire length, mm, $\pm 1\%$	235 (length) x70 (width)
	Wire diameter, mm, $\pm 5\%$	2000
Curved handle for CAP electrode	Weight, kg, $\pm 1\%$	5.5
	Size, mm, $\pm 1\%$	0.253
	Wire length, mm, $\pm 1\%$	235 (length) x 70 (width)
	Wire diameter, mm, $\pm 5\%$	2000
Straight handle for CAP electrode	Weight, kg, $\pm 1\%$	5.5
	Size, mm, $\pm 1\%$	0.226
	Wire length, mm, $\pm 1\%$	210 (length) x 20 (width)
	Wire diameter, mm, $\pm 5\%$	2000
Remote Control	Weight, kg, ± 0.003 kg	5.5
	Size, mm, ± 1 mm	0,036
Remote control battery	Weight, kg, $\pm 10\%$	89x44x12
	Diameter, mm, $\pm 1\%$	0.003
Cylindrical Return Electrode	Weight, kg, ± 0.005 kg	20
	Size, mm, $\pm 1\%$	0,078
	Wire length, mm, $\pm 1\%$	121 (length) x 26 (diameter)
	Wire diameter, mm, $\pm 5\%$	2000
	The mass of the cable electrode return cylindrical, $\pm 0,005$ kg	5.5
Electrode bag	Weight, kg, $\pm 1\%$	0,078
	Sizes, mm, $\pm 1\%$	0.186
Flat return electrode	Weight, kg, $\pm 1\%$	305x75x75
	Sizes, mm, $\pm 1\%$	0.3
	Wire length, mm, $\pm 1\%$	221.8 (width) x 296 (height)
	Wire diameter, mm, $\pm 5\%$	2000
RES electrode with a diameter of 35 mm	Diameter, mm, $\pm 1\%$	5.5
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	35
	Weight, kg, $\pm 1\%$	6
RES electrode with a diameter of 50 mm	Diameter, mm, $\pm 1\%$	0,045
	Diameter of the shaft connected to the	50

	handle, mm, $\pm 10\%$	
	Weight, kg, $\pm 1\%$	6

88


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

RES electrode with a diameter of 65 mm	Diameter, mm, $\pm 1\%$	65
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	6
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0.114
RES electrode with a diameter of 90 mm	Diameter, mm, $\pm 1\%$	90
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	6
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0.209
30 mm diameter CAP electrode	Diameter, mm, $\pm 1\%$	thirty
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	3,5
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0,032
40 mm diameter CAP electrode	Diameter, mm, $\pm 1\%$	40
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	3,5
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0,047
55 mm diameter CAP electrode	Diameter, mm, $\pm 1\%$	55
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	3,5
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0.051
65 mm diameter CAP electrode	Diameter, mm, $\pm 1\%$	65
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	3,5
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0,065
CAP electrode with a diameter of 80 mm	Diameter, mm, $\pm 1\%$	80
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	3,5
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0,085
Longitudinal electrode RES	Size, mm, $\pm 1\%$	100 (length) x 14 mm (diameter)
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	6
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0.119
Longitudinal CAP electrode	Size, mm, $\pm 1\%$	100 (length) x 14 mm (diameter)
	Diameter of the shaft connected to the handle, mm, $\pm 10\%$	3,5
	Weight, kg, $\pm 1\%$	0,046
Massage nozzle	Diameter, mm, $\pm 1\%$	65
	Weight, kg, ± 0.003 kg	0,025
USB stick	Size, mm, ± 1 mm	56x7x19
	Weight, kg, $\pm 10\%$	0.011
Conductive Cream Anticellulite Cream	Size, mm, $\pm 1\%$	163 (height) x 97 (diameter)
	Volume, ml, ± 5 ml	1000
Conductive Cream Face Cream	Size, mm, $\pm 1\%$	163 (height) x 97 (diameter)
	Volume, ml, ± 5 ml	1000
Conductive Cream Care Cream RES electrode with a diameter of 65 mm	Size, mm, $\pm 1\%$	163 (height) x 97 (diameter)
	Volume, ml, ± 5 ml	1000

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.

acch

SPECIFICATIONS

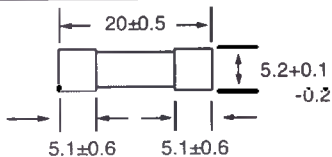No	Specifications		Value
ELITE NS, RGN			
1.	Input voltage, V		100-240 V
2.	Rated frequency		50/60 Hz
3.	Input fuse		2 * 4A, with a delayed response (T 4A L 250 V, in accordance with GOST IEC 60127-2-2013)
4.	Power consumption:		Standby time: 22 W ELITE NS - 360 VA (at 100 V), 352 VA (at 240 V) RGN - 150 VA (at 100 V), 145 VA (at 240 V) With an input voltage of 220-240V: ELITE NS -352 VA RGN - 145 VA
5.	Device protection from:		Random shorts between active and return electrodes Overheating
6.	Display		8 inches, 800x480 pixels with 10.1 " touch screen, 600 cd / m2
7.	Remote control battery		3 V, 220 mAh
8.	Connecting cable		3 pins per connector
9.	Shielded power cable		Input Connector Type - CEE7 / 7 Male Connector (Schuko) Output Connector Type - IEC 60320 C13 Connector
10.	USB stick		8 GB, USB 2.0
11.	The greatest effort required to engage the brakes on wheels, N		150
12.	The force required to move the cart rack with the main unit installed should not exceed, N		100
13.	Curved / straight handle for electrode CAP	The number of pins in the connector	5
		Connector type	Cylindrical
		Connector Diameter, mm, ± 1 mm	19
14.	Straight handle for RES electrode	The number of pins in the connector	4
		Connector type	Cylindrical
		Connector Diameter, mm, ± 1 mm	19
15.	Cylindrical Electrode Return	The number of pins in the connector	3
		Connector type	Cylindrical
		Connector Diameter, mm, ± 1 mm	19
16.	Fuse	Type of	Ceramic Cylinder Fusible 
		Number of fuses	2
		Sizes of a safety lock, mm	
		Fuse rated voltage, V	250
		Rated current of a safety lock, And	4

		Fuse rated time, s	See picture below.
		Fuses can be replaced in case of blown fuses by the user: disconnect the device from the power supply, remove the blown fuse from the fuse compartment, and then insert a new one, close the fuse compartment cover.	

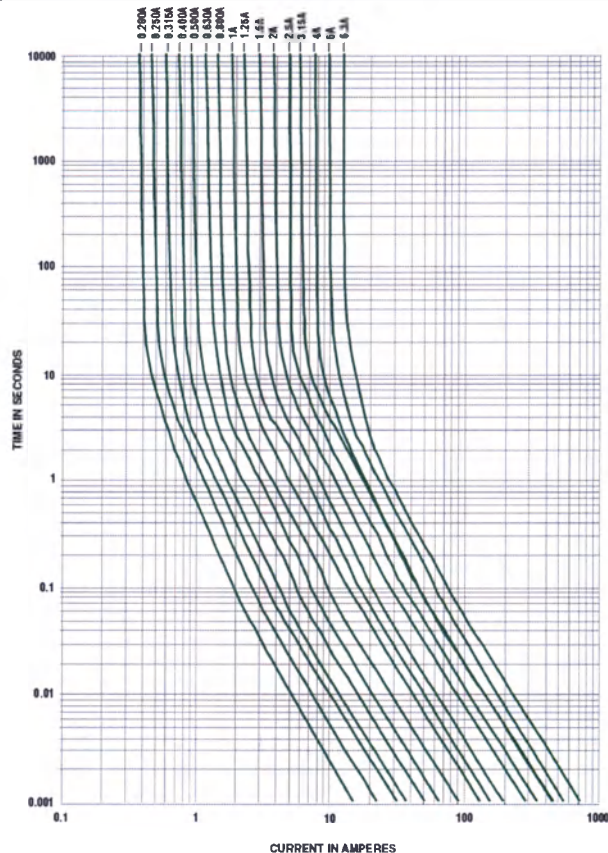


Fig. 69 Fuse response curve in seconds (vertical) versus current in amperes (horizontal).

ELITE NS		
	Resistive (RES) mode	Capacitive (CAP) mode
Output Waveform:	Sinusoidal, with and without modulation	
Type of modulation	Amplitude	
Total Harmonic Distortion (THD):	<2.5%	
Output frequency:	448 kHz	
Maximum output voltage:	120 V ~ (RMS)	620 V ~ (RMS)
Maximum power output:	200 VA	450 VA
Maximum Locked Output Power:	200 watts	150 watts
Permissible error of the output frequency:	± 1 kHz	
Permissible error of output power:	± 10% - ± 2 W, or the larger of the two values	

RGN		
	Резистивный (RES) режим	Емкостный (CAP) режим
Output Waveform:	Sinusoidal, with or without modulation	
Type of modulation	Amplitude	
Total Harmonic Distortion (THD):	<2.5%	
Output frequency:	448 kHz	
Maximum output voltage:	90 V ~ (RMS)	620 V ~ (RMS)
Maximum power output:	65 VA	250 VA
Maximum Locked Output Power:	65 watts	50 watts
Permissible error of the output frequency:	± 1 kHz	
Permissible error of output	± 10% - ± 2 Вт, либо большее из двух значений	

power:

The device is connected and disconnected from the power supply using the power switch on the rear panel. When the switch is in the "0" (Off) position, power is not supplied to the unit.

When checking or replacing fuses, disconnect the shielded power cable from the unit and turn the switch to the "0" position ("Off" position). Replaceable fuses must have the above specifications. This information can also be found on the markings located next to the fuse compartment.

Percentage of Conductive Creams

Conductive Cream Anticellulite Cream

Component	% content
Water	65,090
PEG-6 stearate	9,000
Vaseline oil	5,000
PEG-6 hydrogenated palm / palm kernel oil	5,000
Capric / Caprylic triglyceride	3,000
Glycol stearate	3,000
PEG-32 stearate	3,000
Propylene glycol	2,800
Sodium sulfate	1,200
Benzyl alcohol	0,800
Lanolin PEG-75	0,500
Dipropylene glycol	0,400
Perfumery fragrance	0,300
Myrtle arabic extract	0,200
Forskolia Coleus Root Extract	0,200
Horse Chestnut Extract	0,150
Triethanolamine	0,149
Salicylic acid	0,100
Glycerol	0,070
Sorbic acid	0,030
Fucus Bubble Extract	0,015

Conductive Cream Face Cream

Component	% content
Water	74,12180
PEG-6 stearate	7,68000
Vaseline oil	5,00000
Capric / Caprylic triglyceride	3,00000
PEG-6 hydrogenated palm / palm kernel oil	3,00000
Glycol stearate	2,16000
PEG-32 stearate	2,16000
Sodium sulfate	1,20000
Glycerol	0,04000
Salicylic acid	0,12000
Lanolin PEG-75	0,50000
Triethanolamine	0,17820
Sorbic acid	0,04000
Benzyl alcohol	0,80000

Conductive Cream Care Cream

Component	% content
Water	68,980
PEG-6 stearate	9,000
Vaseline oil	5,000
PEG-6 hydrogenated palm / palm kernel oil	5,000
Capric / Caprylic triglyceride	3,000
Glycol stearate	3,000
PEG-32 stearate	3,000
Sodium sulfate	1,200
Lanolin PEG-75	0,500
Benzyl alcohol	0,800
Perfumery fragrance	0,200
Triethanolamine	0,119
Salicylic acid	0,100
Glycerin	0,070
Sorbic acid	0,030

Characteristics of electrically conductive creams

	Conductive Cream Care Cream	Conductive Cream Face Cream	Conductive Cream Anticellulite Cream
Density, g / cm ³	1	1	1
pH	5,55	6,35	5,50
Viscosity, MPa * s	90000-150000	90000-150000	90000-150000
Electrical resistivity, Ohm * m	2,75 – 5,11	1,1 – 3,6	3,07 – 5,43
Maximum allowable contact time with skin, min	60	60	60

DISPOSAL

Dispose of the product in accordance with SanPiN 2.1.7.2790-10 for class B waste (epidemiologically hazardous waste). After hardware-based disinfection methods using physical methods and changing the appearance of the waste, eliminating the possibility of their reuse, class B waste can be accumulated, temporarily stored, transported, disposed of and disposed of together with class A waste (epidemiologically safe waste similar in composition to solid household waste waste). The packaging of Class B medical disinfected waste must be labeled to indicate that the waste has been decontaminated.

Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE

..
.
.
.



.
.
.
.
.
.

Guarantees

INDIBA warrants that the product is free from defects in materials and workmanship.

The warranty on the device is valid for 2 (two) years from the date of purchase by a professional user. The warranty applies to any owner of the device during the warranty period in respect of defects in materials and workmanship.

Warranty on return and active electrodes, handles for electrodes depends on their frequency of use and care. The guarantee for return electrodes, handles for electrodes is two years, and for electrodes (capacitive and resistive) - one year.

The product has only been tested using conductive creams manufactured by INDIBA, therefore the warranty is valid only when using these conductive creams.

The manufacturer, assembler, installer or licensed importer is responsible for the safety, reliability and proper functioning of the product if:

1. All assembly, adjustment and repair operations are carried out by an individual or a company authorized by the manufacturer.
2. The electrical system in the treatment room complies with applicable requirements.
3. The device is used in accordance with the approved instruction manual.

The warranty does not cover the following cases:

1. Any malfunction or malfunction of the device if the integrity of the protective seal has been violated.
2. Any other malfunctions or malfunction of the device, not associated with defects in materials and workmanship, as well as improper use of the product.
3. Repairs made by an unauthorized service center or repaired using parts from unapproved INDIBA manufacturers.
4. Damage caused by the work of any party other than the manufacturer, dealer or authorized service agent

In order to receive technical support from a manufacturer, dealer or authorized service agent during the warranty period, the owner must:

1. Send a letter (by e-mail cs@indiba.com or by mail) to INDIBA, the dealer or an authorized service agent with a description of the problem during the warranty period.
2. If you need to send the device for inspection or repair, the attached letter indicates the serial number of the device (located on the label on the back of the device), the full name of the owner, full address, phone number and invoice number (if applicable) together with the name dealer or authorized service agent from whom the machine was purchased.

SERIAL NUMBER

The product identification mark is attached to the back of the machine. The serial number format is as follows:
YY S XXXX MM

YY: production date

S: model identification

XXXX: production number

MM: production month

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

Troubleshooting

PROBLEM	ДЕЙСТВИЯ
"The product does not heat up"	• Make sure that all elements of the product, and especially the return electrode, are connected correctly. • If the indicator next to the start / stop button on the control panel is off, the start button has not been pressed. • If the indicator next to the start / stop button of the procedure blinks and the timer for counting the procedure time has been stopped, the device waits for contact between the electrode and the patient. • If the indicator next to the start / stop button of the procedure does not blink, and the timer for counting the time of the procedure counts the time, the device has detected contact with the patient. • If the problem persists, contact INDIBA Technical Support.
Capacitive electrode causes discomfort (acute pain)	• Make sure that there are no cracks or small holes on the surface of the electrode. Otherwise, replace the electrode. • During the procedure, the entire surface of the electrode should come into contact with the skin. If only a certain part of the electrode is in contact with the skin, all current passes through this small area, which can cause discomfort. - If the treatment area is uneven, use a smaller electrode. • Make sure that enough conductive cream has been applied to the skin. • If the problem persists, contact INDIBA Technical Support.
The ready light does not turn on when the power switch is pressed.	• • Ensure that the shielded power cable is not damaged and that it is correctly connected to the power supply. • • • Make sure that the power outlet is working correctly (for testing, connect another product to the connector). • • • Check that the two input fuses have not tripped. Otherwise, replace them with new fuses with the same characteristics (see section "Technical data"). • • • If the problem persists, contact INDIBA Technical Support.

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY FE

The control panel does not work (the indicator does not turn on when the start / stop button is pressed).

The device does not always respond to the buttons of the control panel, even if the indicator of the control panel turns on when you press the start / stop button of the procedure.

- The battery is low. Replace her.
- If the control panel still does not work after replacing the battery (the indicator does not turn on when you press the start / stop button of the procedure), make sure that the battery is in the correct position.
- If the problem persists, contact INDIBA Technical Support.
 - Move the remote control closer to the unit, as interference may interfere (the range of the control panel is 4 to 5 meters).
 - Check the battery level on the settings screen. If the battery is low, replace them.
 - If the problem persists, contact INDIBA Technical Support.

ERROR MESSAGES

When the machine detects an abnormal situation, it terminates the procedure and displays an error message. Each non-standard situation is encoded using an error number. The device displays the error number, a brief description and any additional information available.

If most errors occur, the only option for the user is to acknowledge the error. This is necessary to protect the user, patient, and the device itself. Then the device automatically turns off.

Some errors allow the user to continue using the machine after confirming the error.

If an error occurs, write down all the information displayed on the screen and contact INDIBA Technical Support.

Glossary of technical terms

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

The ability of an electronic product not to interfere with other products and not to be sensitive to interference from other products.

ELECTRICAL SAFETY

A number of conditions that a product must meet in order to ensure the safety of people during normal use.

FREQUENCY

The number of repetitions of one cycle in one second. This concept refers to the frequency of alternating current. Unit: Hertz (Hz).

ELECTRICAL VOLTAGE

The electrical potential of the product or electrical system. The difference of electric potentials between two points of the circuit. Unit of measurement: Volt (V).

ELECTRICITY

A physical variable that expresses the amount of electricity flowing through a conductor over a given unit of time. Unit Type: Amp (A).

ELECTRICAL RESISTANCE

Resistance to current flow provided by the conductor. Unit: Ohm (Ohm).

ELECTRICAL IMPEDANCE

The relationship between the AC voltage applied to the circuit and the current generated by a load that does not have a pure resistance, but instead contains a capacitor. Unit: Ohm (Ohm).

CAPACITOR

A system of conductors separated by a dielectric (insulating) membrane that stores an electric charge. Under ideal conditions, it does not dissipate energy, but simply stores and then transfers it.

TOTAL POWER (VA)

The product of the voltage applied to the impedance and the current passing through it. Applicable when the load is impedance rather than ohmic resistance.

ACTIVE POWER (W)

The amount of energy consumed per unit of time that is dissipated into the patient's tissue.

ACTIVE ELECTRODE

The electrode in which the largest increase in temperature is observed due to current density.

ACTIVE METAL ELECTRODE (RESISTIVE)

Active metal electrode without an insulating layer.

ACTIVE METAL ELECTRODE (CAPACITIVE)

Active metal electrode with an insulating layer.

RETURN FLAT ELECTRODE

It is also an electrode, but it has a much larger surface area than the active electrode. Therefore, the current density in it is lower, so that the temperature in the surrounding tissue does not increase.

RETURN CYLINDER ELECTRODE

It is also an electrode, but it has a much larger surface area than the active electrode. Therefore, the current density in it is lower, so that the temperature in the surrounding tissue does not increase.

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

EMC Information
Manufacturer's Manual and Declaration - Electromagnetic Emissions

The product is intended for use in an electromagnetic environment as defined below. The buyer or user of the product should ensure its use in the specified environment.		
EMC Tests	Conformity	Electromagnetic environment - instructions
Radio interference according to CISPR 11	Group 1	The product uses conductively coupled high-frequency energy necessary for the functioning of the product itself. Thus, the radiation of the product does not cause interference in neighboring electronic equipment.
Radio interference according to CISPR 11	Class B	The product is intended for use in premises for domestic purposes, as well as in rooms directly connected to low-voltage distribution electric networks (general purpose electric networks)
Harmonic components of current consumption in accordance with IEC 61000-3-2	Class A	
Compliance of voltage changes, voltage fluctuations and flicker caused by the vehicle with the standards of IEC 61000-3-3	Conformity	

The product is intended for use in an electromagnetic environment as defined below. The buyer or user of the product should ensure its use in the specified environment

The product is intended for use in an electromagnetic environment as defined below. The buyer or user of the product should ensure its use in the specified environment.			
Immunity Test	Test level according to IEC 60601	Compliance Level	Electromagnetic environment - instructions
Electrostatic discharges (ESD) according to IEC 61000-4-2	± 6 kV - contact discharge ± 8 kV - air discharge	± 6 kV - contact discharge ± 8 kV - air discharge	The floors of the room should be made of wood, concrete or ceramic tile. If the floors are covered with synthetic material, then the relative humidity should be at least 30%
Nanosecond impulse noise according to IEC 61000-4-4	± 2 kV - for power lines ± 1 kV - for input-output lines	± 2 kV - for power lines ± 1 kV - for input-output lines	The quality of electrical energy in the building's electrical network must be consistent with the typical conditions of a commercial or hospital setting.
High energy microsecond impulse noise according to IEC 61000-4-5	± 1 kV - when applying wire-to-wire interference ± 2 kV - when applying wire-to-ground interference	± 1 kV - when applying wire-to-wire interference ± 2 kV - when applying wire-to-ground interference	
Voltage dips, interruptions and voltage changes in input power lines according to IEC 61000-4-11	<5% UT (voltage dip) 95% UT) for 0.5 period; 40% UT (voltage dip 60% UT) for five periods; 70% UT (voltage dip 30% UT) for 25 periods; <5% UT (voltage dip) 95% UT) for 5 s	<5% UT (voltage dip) 95% UT) for 0.5 period; 40% UT (voltage dip 60% UT) for five periods; 70% UT (voltage dip 30% UT) for 25 periods; <5% UT (voltage dip) 95% UT) for 5 s	The quality of electrical energy in the building's electrical network must be consistent with typical commercial or hospital conditions. If the product user needs continuous operation under interruptions in the mains voltage, it is recommended that the product is powered by a battery or uninterruptible power supply.
Industrial frequency magnetic field according to IEC 61000-4-8	3 A / m	3 A / m	The magnetic field strength of the industrial frequency at the designated installation location should correspond to the typical conditions of a commercial or hospital setting.

Note: UT is the voltage level of the electric network until the test impact is applied.

Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.

Immunity Test	Test level according to IEC 60601	Compliance Level	Electromagnetic environment - instructions
Conducted interference induced by radio frequency electromagnetic fields in accordance with IEC 61000-4-6	3 V (rms) in the band from 150 kHz to 80 MHz	3 V (rms value)	The distance between the portable / mobile radio communications used and any part of the product, including cables, must be at least the recommended spatial separation, which is calculated in accordance with the above expression as applied to the frequency of the transmitter. Recommended spacing: calculated by the formula: $d = 1,2\sqrt{P}$ for the frequency band from 80 kHz to 800 MHz: $d = 1,2\sqrt{P}$ for the frequency band from 800 kHz to 2.5 MHz: $d = 2,3\sqrt{P}$ where P is the nominal value of the maximum output power in W in accordance with the value set by the manufacturer; d - recommended spatial spacing, m The field strength during the propagation of radio waves from stationary radio transmitters according to the results of observations of the electromagnetic environment should be below the level of compliance in each frequency band. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the mark. 
Radiated radio frequency electromagnetic field according to IEC 61000-4-3	3 V / m in the band from 80 MHz to 2.5 GHz	3 V / m	

Note:

1. At frequencies of 80 and 800 MHz, a larger field strength value is used;
2. The above expressions are not applicable in all cases. The propagation of electromagnetic waves is affected by absorption or reflection from structures, objects and people;
3. Field strength during the propagation of radio waves from stationary radio transmitters, such as base stations of radio telephone networks (cellular / wireless) and terrestrial mobile radio stations, amateur radio stations, AM and FM broadcast transmitters, television transmitters, cannot be determined by calculation with sufficient accuracy. For this, practical measurements of the field strength should be carried out. If the measured values at the product location are higher than the applicable compliance levels, then the product should be monitored to verify its normal functioning. If during the observation process a deviation from normal functioning is detected, then additional measures must be taken, such as reorienting or moving the product.

Recommended separation values between portable and mobile RF communications equipment and the product

The product is intended for use in an electromagnetic environment in which the levels of radiated interference are controlled. The buyer or user of the product can avoid the influence of electromagnetic interference by providing a minimum spatial separation between portable and mobile radio frequency communications (transmitters) of the product, as recommended below, taking into account the maximum output power of communications			
Nominal maximum output power of the transmitter P, W	Spacing d, m, depending on the frequency of the transmitter		
	d = 1,2√P in the band from 150 kHz to 80 MHz	d = 1,2√P in the band from 80 to 800 MHz	d = 2,3√P in the band from 800 MHz to 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.37	0.73
1	1.20	1.20	2.30
10	3.70	3.70	7.30
100	12.00	12.00	23.00

Note:

1. At frequencies of 80 and 800 MHz, a larger field strength value is used;
2. The above expressions are not applicable in all cases. The propagation of electromagnetic waves is affected by absorption or reflection from structures, objects and people;
3. When determining the recommended values of the spatial separation d for transmitters with a nominal maximum output power not shown in the table, the nominal maximum output power P in watts specified in the transmitter manufacturer's documentation is substituted in the above expressions.

Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

MANUFACTURER

INDIBA, S.A. («Indiba S.A. », Spain)

C/ Moianès, 13

Pol. Ind.

Casablanques

08192 Sant

Quirze del Vallès

Barcelona

(Spain)

Phone: +34 93 265 55 22

Fax: +34 93 576 30 40

www.indiba.com



Авторское право © 2019 INDIBA S.A. Все права защищены.



Annex 1

MONITORING PROGRAM

Manual

Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.

Sección 2ª,

Content

05	1. System requirements
05	1.1 Functional warnings
06	2. INSTALLATION
07	2.1 First launch of software
09	2.2 Creating Users
11	3. OPERATION
11	3.1 Patients
12	3.2 Description of the patient (condition)
13	3.3 Procedure
16	3.4 History
18	4. MANUAL SETTING
19	5. PRINT
19	5.1 Insert custom logo
19	5.2 Printing a story
20	5.3 Status printing
20	5.4 Stages of printing
21	6. SETTINGS
21	6.1 User Management
21	6.2 Language
21	6.3 Version
22	7. DATA
22	7.1 Database Export
22	7.2 Importing a database
23	7.3 Database Integration
24	8. PROTOCOLS
24	8.1 Export Protocol
25	8.2 Import Protocol

IMPORTANT: Directive 95/46 / EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 guarantees the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data. Compliance with the requirements of this directive is mandatory in the European Union. The country in which you are located, whether it is part of the European Union or not, may have approved its own legislation in this area. If so, these requirements must be observed.

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

1. System requirements

A **monitoring program** has certain minimum system requirements.

Ensure that your environment meets these requirements before proceeding with the installation:

- Screen resolution of 1024 x 768 or higher for optimal display.
- Browser that supports HTML5 (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
- Computer with Wi-Fi connection. If your computer does not have a Wi-Fi module or the Wi-Fi module is not activated, contact the support service of the manufacturer of this computer.

Requirements for CPU, RAM, internal memory, etc. same as for the operating system. More internal memory may be required to store more patient data.

1.1 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- Ensure that the browser is not configured to periodically clear history data.
- Do not use private browsing in a browser. The database will not work.
- The browser must save history, data cache, and session variables.
- ◆ Always back up before deleting your browsing history.
- Each browser uses its own database.

1. Installation

The device also has a unique password for access to software for monitoring the implementation of procedures (hereinafter referred to as the monitoring program). This program should be downloaded to the specified address:

www.indibadeepcare.com/en/downloads/


and enter the required password, the monitoring program will be installed on the computer.

The program is downloaded in a compressed folder in .ZIP format. There are two files in the ZIP folder: one is the folder for copying, and the other is the same compressed folder that will be saved as a backup.



1. Drag the folder from the .ZIP file to the hard disk of the computer (it must be copied to the root directory of the memory).

2. In order not to waste time searching for a monitoring program, you can create a shortcut by going to the copy location of the folder, right-clicking and selecting "Create Shortcut".

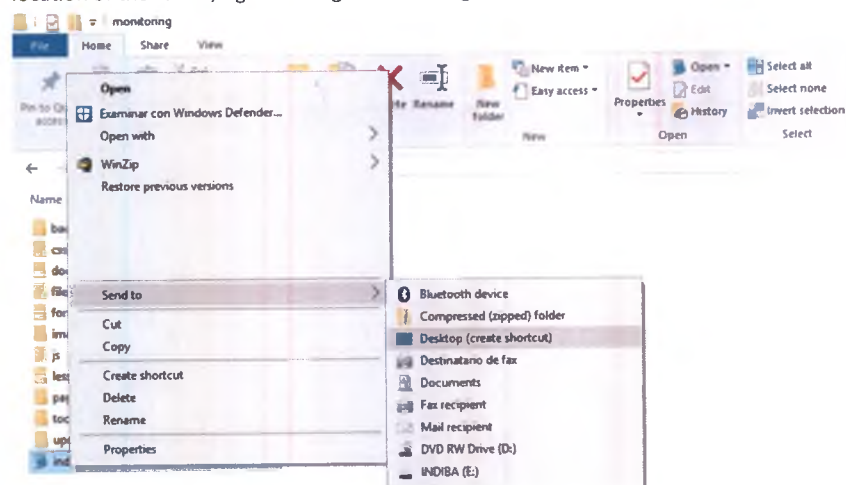

6

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА


Ha causado el asiento n° 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Handwritten signature


1.1 FIRST START-UP OF THE SOFTWARE

Before starting the monitoring program for the first time, it is necessary to establish a wireless connection between the computer and the device. To do this, follow these steps:

1. Click on the computer's Wi-Fi icon (it will flash white) and wait a few seconds.
 2. Connect the computer to the wireless network, which will be displayed as INDIBA_xxxxxxx, where xxxxxxx is the serial number of the machine.
 3. Enter a password to establish a connection. The password is wifiindiba.
 4. Once the connection is established, the Wi-Fi icon of the computer changes to blue and continues to flash.
- Now you can run the monitoring program on your computer for the first time. To do this, select the index.html file and run it. If several browsers are installed on your terminal (Chrome, Firefox or Safari), then "run as" (right-click on index.html) and "open with" appears, where you can select the desired browser. After a few seconds, the screen below will appear:


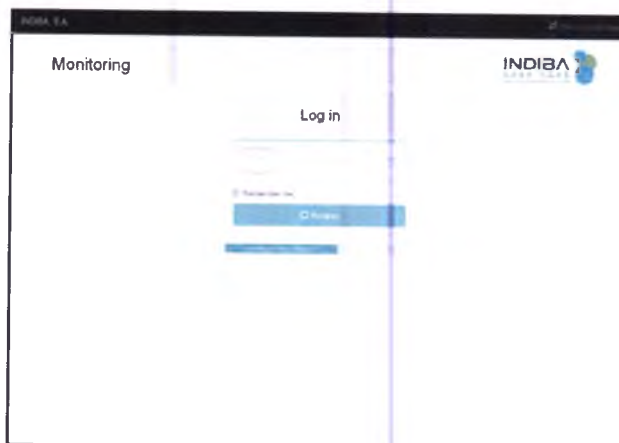


After confirming the creation of a database of ongoing procedures, the monitoring program will start and a window for entering the login and password by the user will appear.

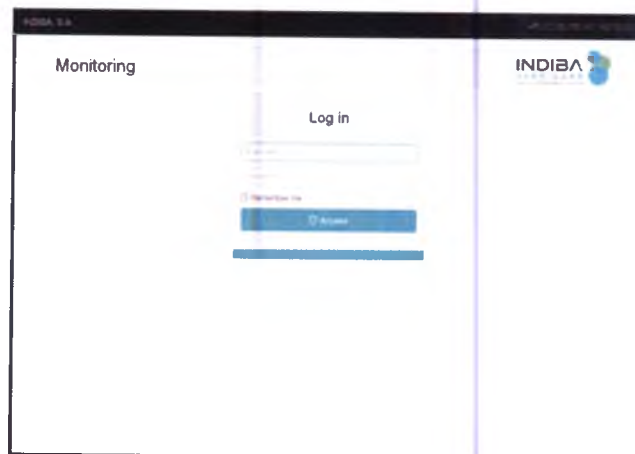

At the first start, the program establishes a Wi-Fi connection with the device. If you have successfully connected wireless, the program expects to receive data from the device.

IMPORTANT: The user will not be able to work with the monitoring program until a connection is made to the device. After connecting, only a username and password are required to work with the program.

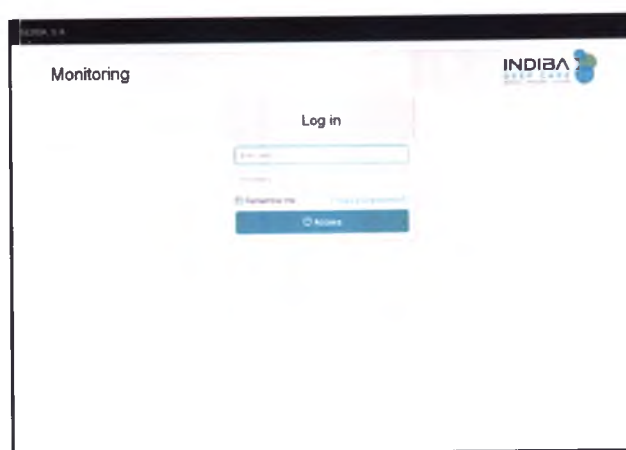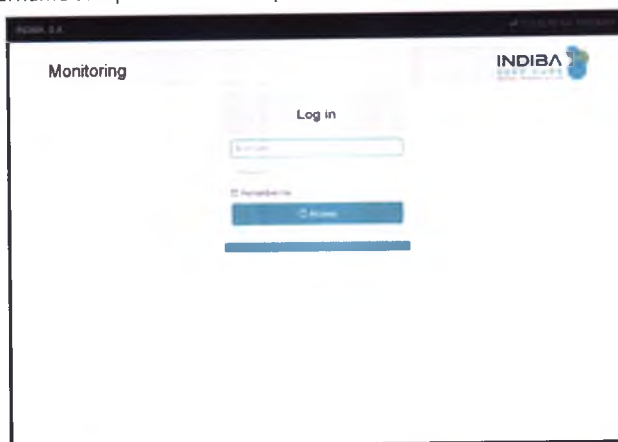

The default username is indiba, the password is indiba.

IMPORTANT: if the “Remember me” checkbox is not selected, the user will need to enter their data each time to enter the program when it starts.

IMPORTANT: after entering with default data, the program detects that only this user exists, and instead of going to the patient window, redirects to the user creation window. This will happen every time a user enters the program until a new user profile is created instead of the default profile.

If the user has problems logging into the program with default data, the user can start working with the program by requesting a temporary password from the INDIBA customer service department. To do this, click on the link “Forgot your password?” And a pop-up window will appear containing the code. It must be reported to the INDIBA customer service department by calling the telephone number provided in the manufacturer’s contact information or by writing to cs@indiba.com, after which INDIBA specialists will send you a new generated password, valid for 7 days.


8

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª,
DOY FE


[Handwritten signature]

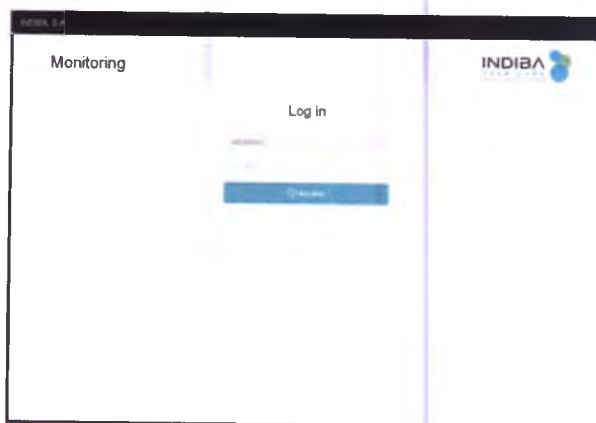


After entering the login and password, the program will open a user window.

1.1 CREATING USERS


The user creation screen appears immediately after entering the default username and password - indiba. This screen looks like this:

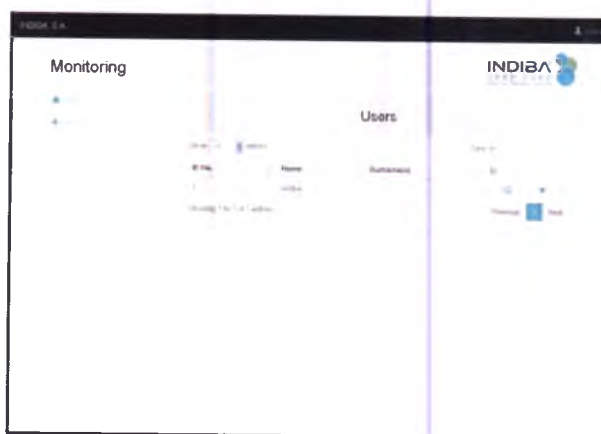

The following explains how to create a new user named "John Simpson". To do this, fill in the fields of the pop-up menu, indicating the user identification number, first name, last name and password. Only lowercase letters are required to enter the password.

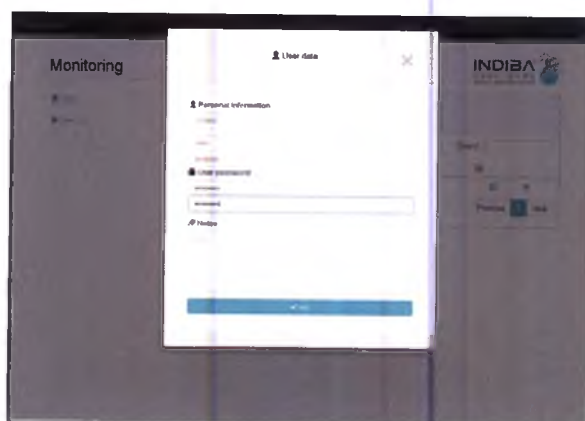

After creating the user, a screen appears displaying all users in the database. On this screen you can edit a record or delete it. ✕

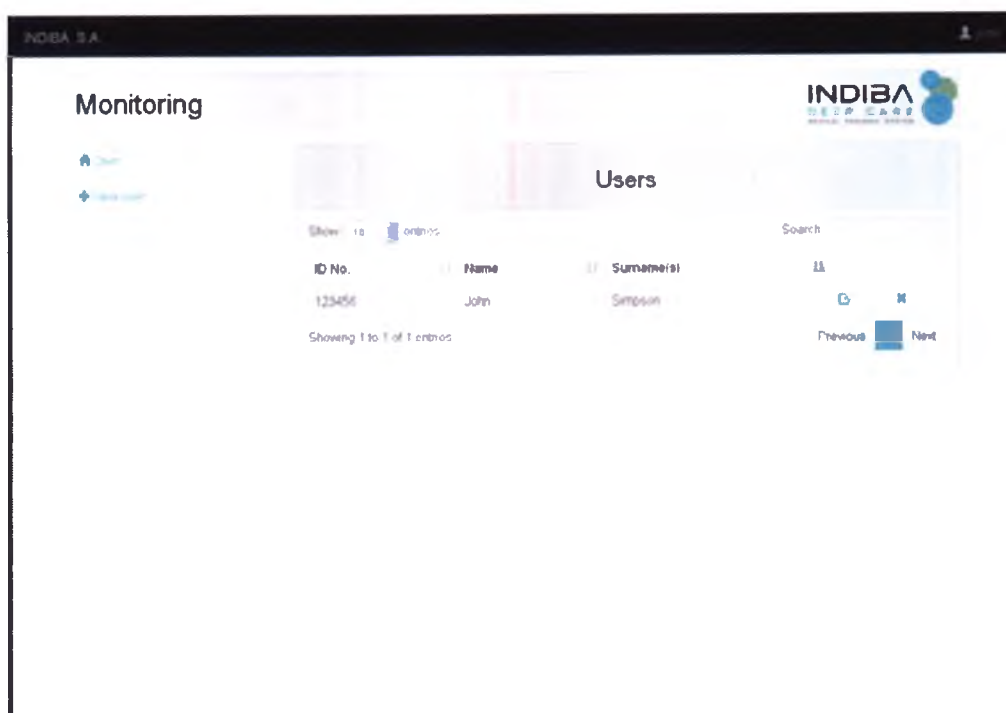

If you do not want to create a new user, click on the “Start” link and go to the main screen (patients), using indiba data to enter the program. To create new users, see clause 7.1 “User management”, which describes this process in detail.

If you want to log in as a new user, you must log out of your Indiba account (in the black panel Logout”) and log in as a new user.


IMPORTANT: Each time you enter with standard indiba data, the program will redirect users to the screen, regardless of whether other users have already been created or not. If you log in as another user, the program will go to the main screen (section 3.1 Patients), where you can work with the program.

1. Operation

1.1 PATIENTS


The start screen is the patients screen. All operations with patients can be performed on this screen, in addition to procedures based on the amount of energy transferred and on the time of the procedure, for which only the data obtained on the device itself are used to create a report and results.

The start screen looks like this:

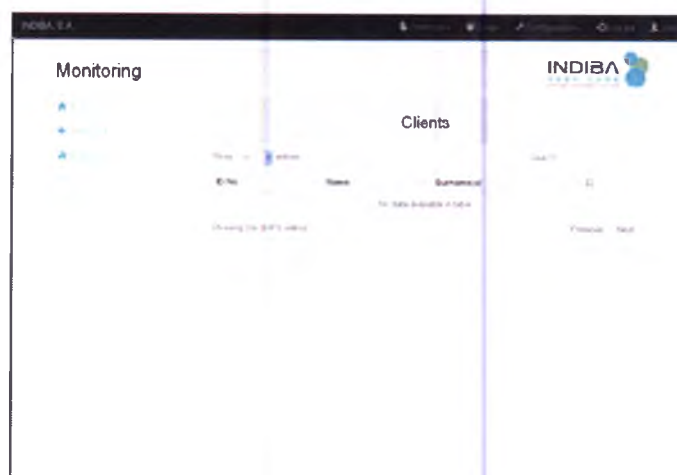

At the top of the black bar is a drop-down menu ("Protocols" - PROTOCOLS, "Data" - DATA and "Configuration" - SETTINGS) and the option to log out of the current user's account ("Log out"). On the left, users can add new patients ("New Client") or perform the procedure without adding a new patient, but with data on the procedure ("Manual settings"). In the middle of the screen is a list of patients who can be searched directly and sorted in ascending or descending order by clicking the icons at the top.


To create a new patient, click "New Client" and the following pop-up menu will appear:

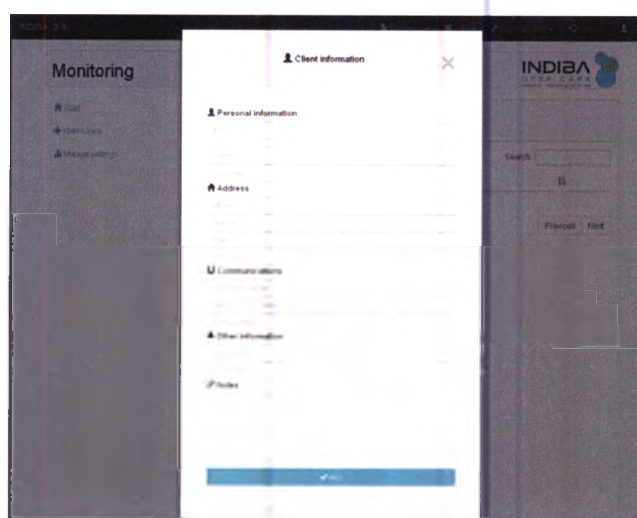

Fill in the required fields and click "Add" - Add.

IMPORTANT: The [Identification Number] field cannot be changed after creation by the user. If the number is entered incorrectly, it must be deleted and re-entered. If you delete this user, all related data will be deleted.


After creating the patient, the following screen will appear:

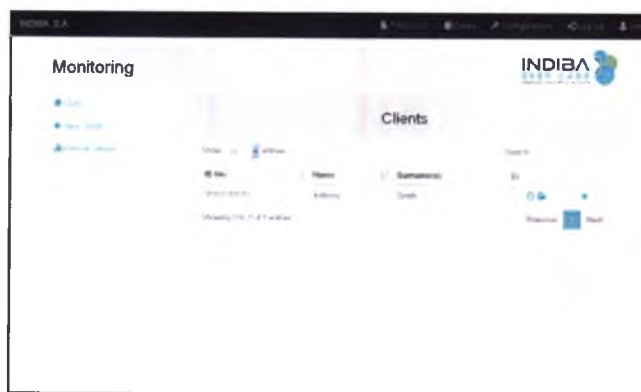


A series of icons will be displayed for each patient: the first to edit the record, the second to go to the patient's medical history and the third to delete the patient. After the patient is deleted, the data associated with it will be deleted from the database.

1.1 DESCRIPTION OF THE PATIENT (CONDITION)

Click on the name of the patient to view his description. The patient description screen has the same structure as the previous screen. However, the black toolbar at the top of the screen now only shows the username. Another change: the patient's name is displayed above the patient information table.

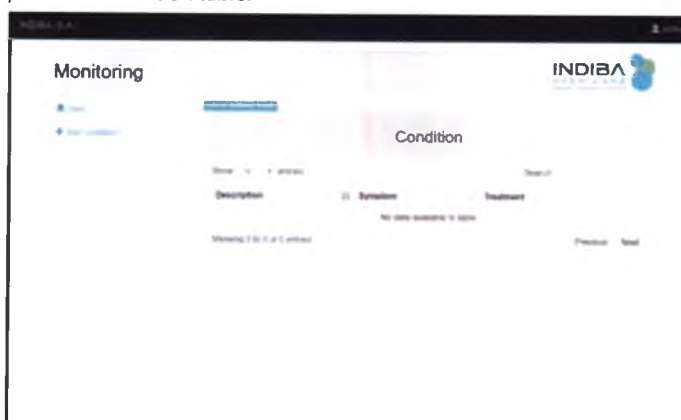


To add a description to the patient, click "Add condition" -Add a description, and a new pop-up menu will appear to enter the necessary information:

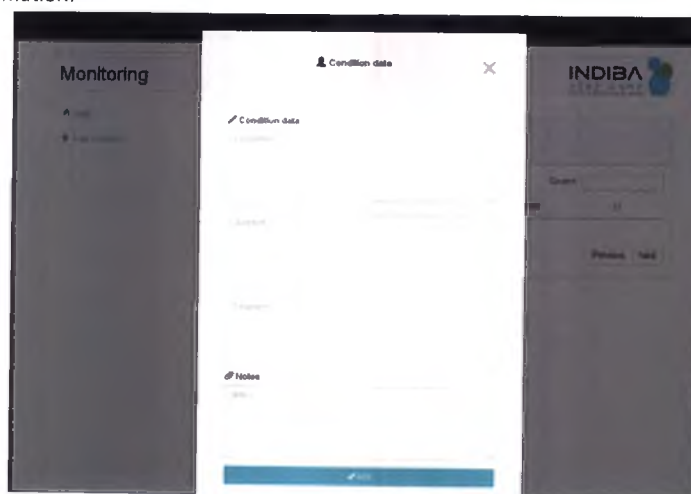

Handwritten signature

After the information has been entered, click “Add” - Add”, and the following screen will be displayed:

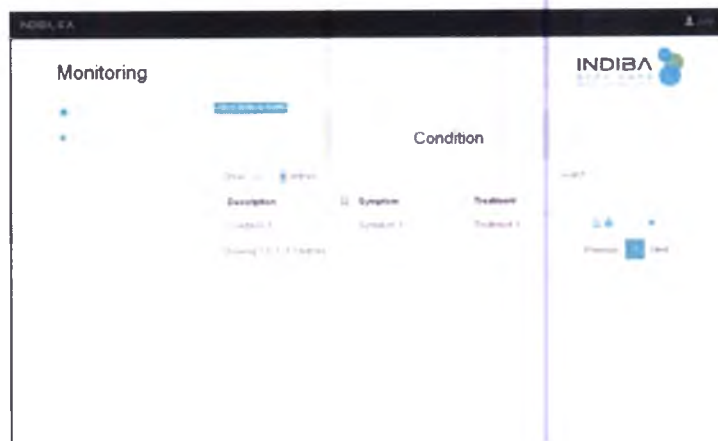


For each state, a series of icons will be displayed: the first to edit the record, the second to print the parameters of the procedure carried out for this state and the third to delete the state. When you delete a description, all related procedures are deleted from the database.


Click on a state to display the corresponding procedures that have been performed for that state.

1.1 PROCEDURE


The structure of the procedure screen is the same as the previous screens. The user can view the procedures that have already been completed or add new ones. The user name and corresponding status are displayed above the procedure table.

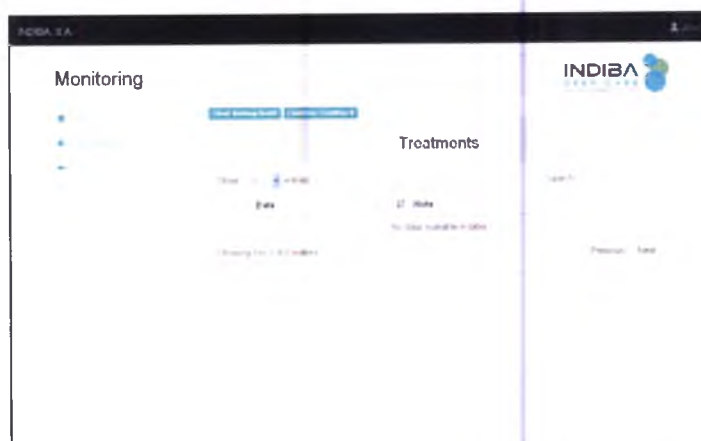


Click “Add treatment” - Add procedure to go to the next screen:

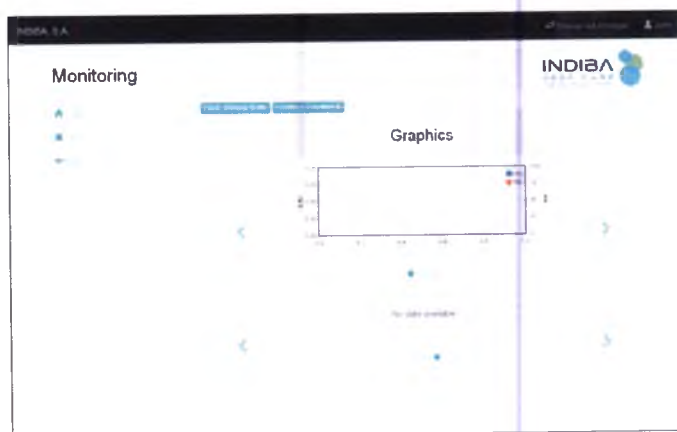

At the top of the screen, in addition to the user name, a new message "Device out of range" - The device is out of range. If the device has a Wi-Fi connection with the computer, after a few seconds the name of the device and its serial number will appear at the top of the screen, as shown in the following figure:

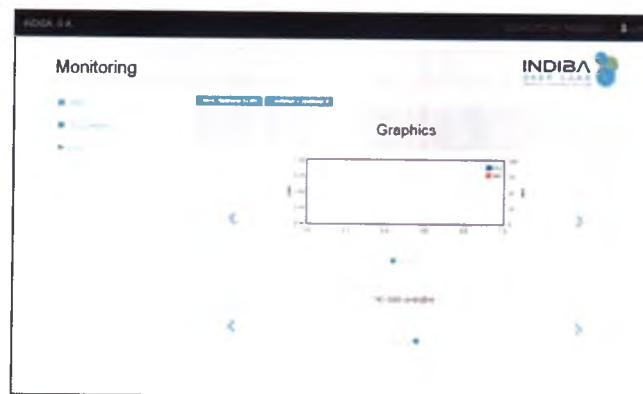


When the machine starts, the schedule changes over time, showing the last two minutes of the procedure. Click on the side arrows to display the data in a different format.

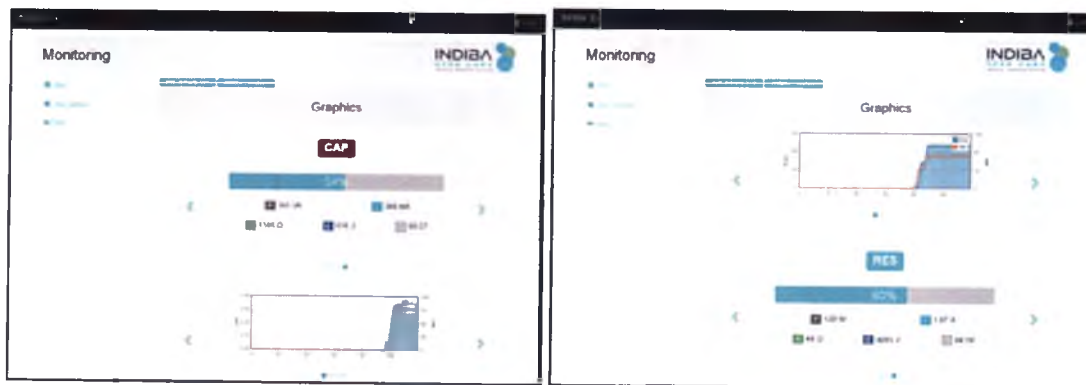


When the procedure moves to a new stage, a new schedule will be built for it. The switching of stages will continue until the user stops the procedure on the device or the data collection is stopped by pressing the "Stop capture" button - Stop data collection - in the program, in which case the data of the entire procedure will be displayed on the graph, and not just the last two minutes.

By clicking "Back" - Back, you will return to the previous page.


After receiving data about the procedure, the procedure screen will look like this:

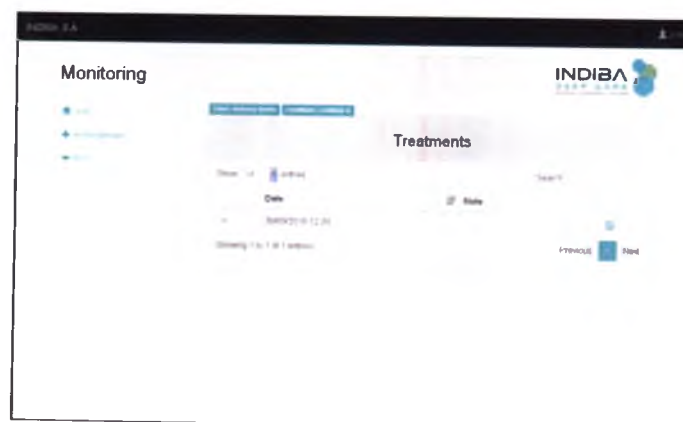


The Notes field remains blank at the end of the procedure, but you can edit it by clicking on the edit icon.

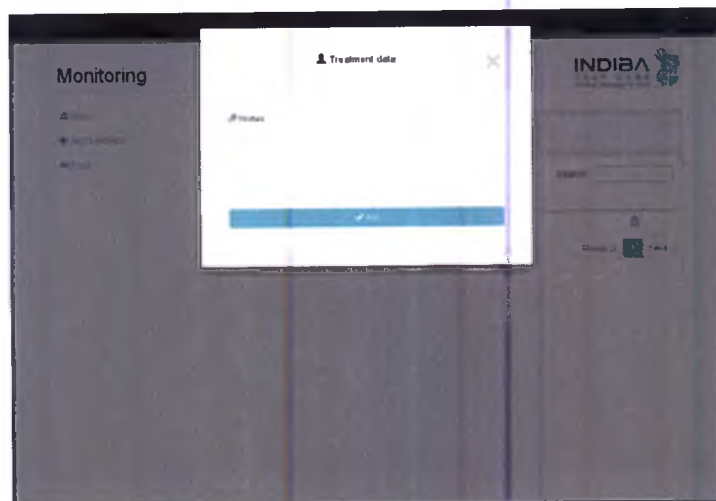

On the procedures screen, there is a downward arrow that indicates that additional information can be revealed. After clicking on the arrow, the following will be displayed:

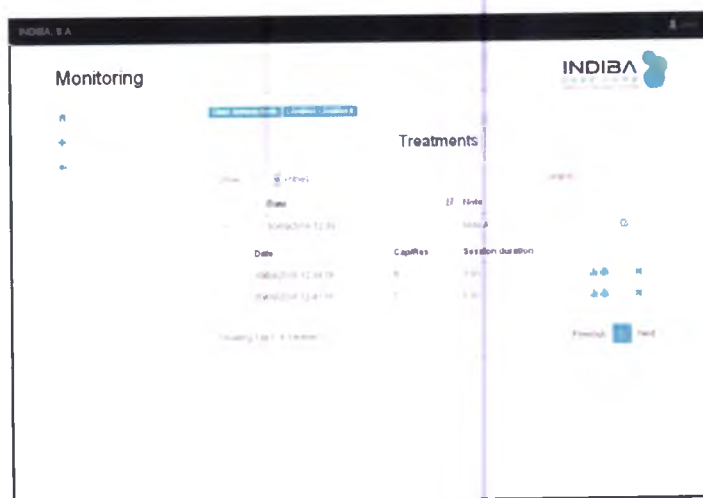


If the user clicks on a procedure and for some reason the data does not appear, or he clicks on a procedure that does not contain data, the following will be displayed on the procedure screen:

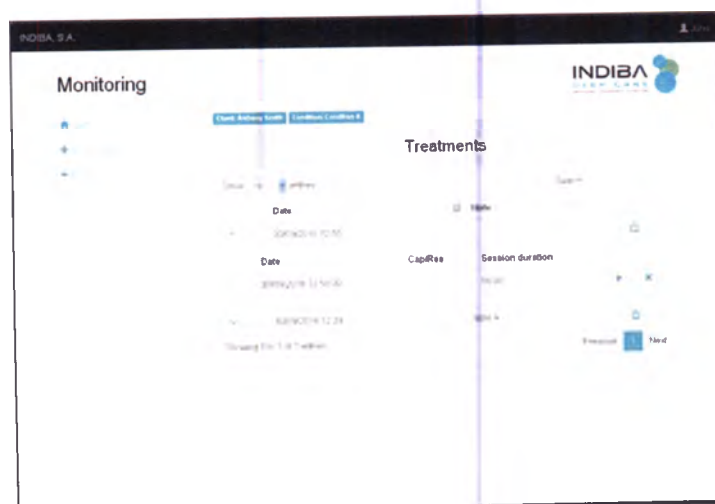


The procedure was interrupted. The duration of the session is 00:00. Click the icon to restart the session or to delete the session.

During the normal procedure, click the icon to display the results of this step, which can then be used for analysis.

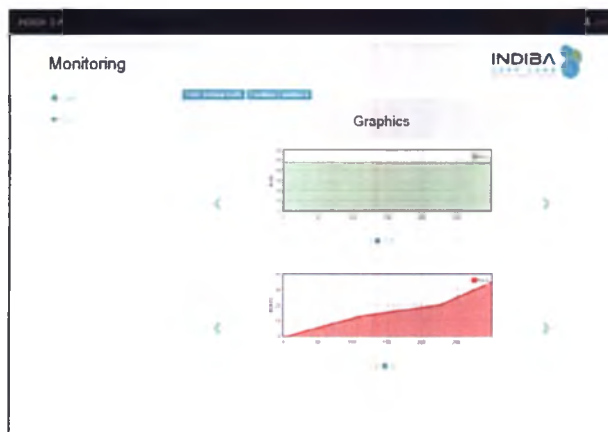


1.1 HISTORY

On the start screen, click on the icon next to the patient to access the history screen.

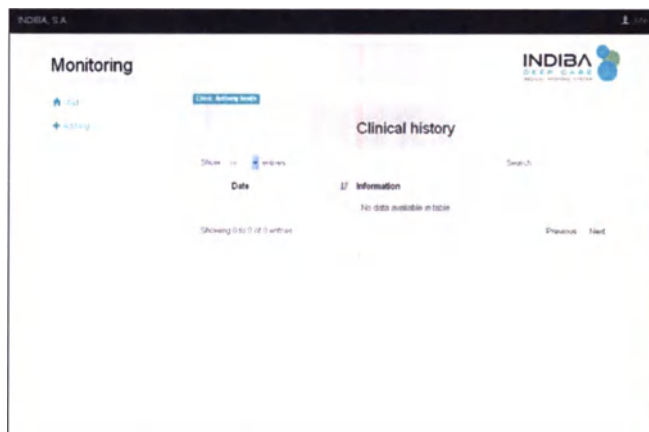


To add an entry, click "Add log" - Add a log, and a drop-down menu will appear to add the necessary information.

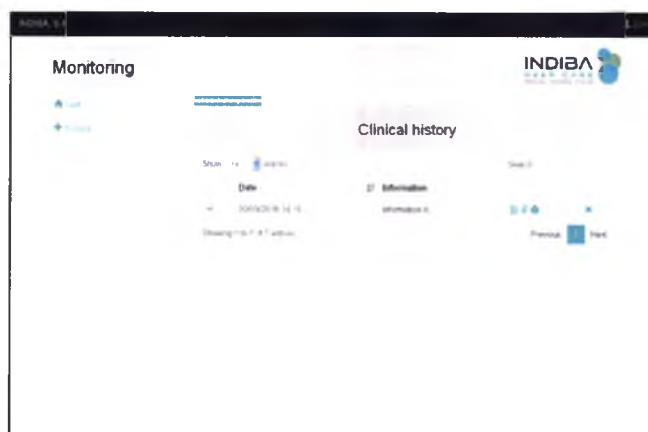


If the patient has data files, they can be linked to the record by clicking on the icon. All files provided by patients should be saved in a subfolder of the folder where the monitoring program was installed.


A screen appears that looks like this:

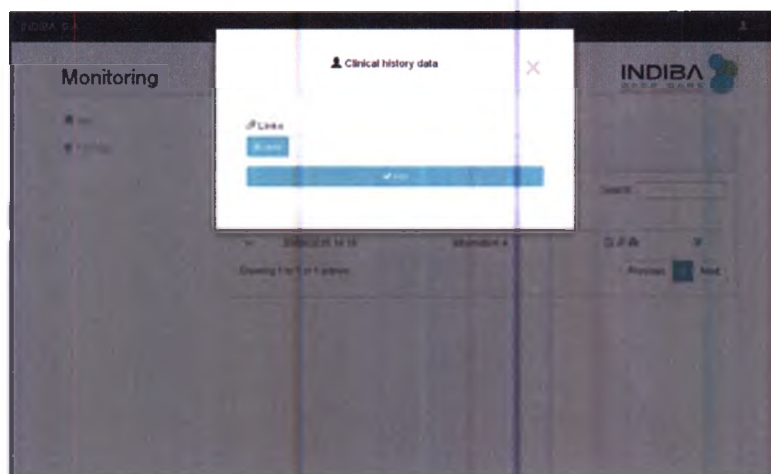

Click Browse - Browse to select the desired file:

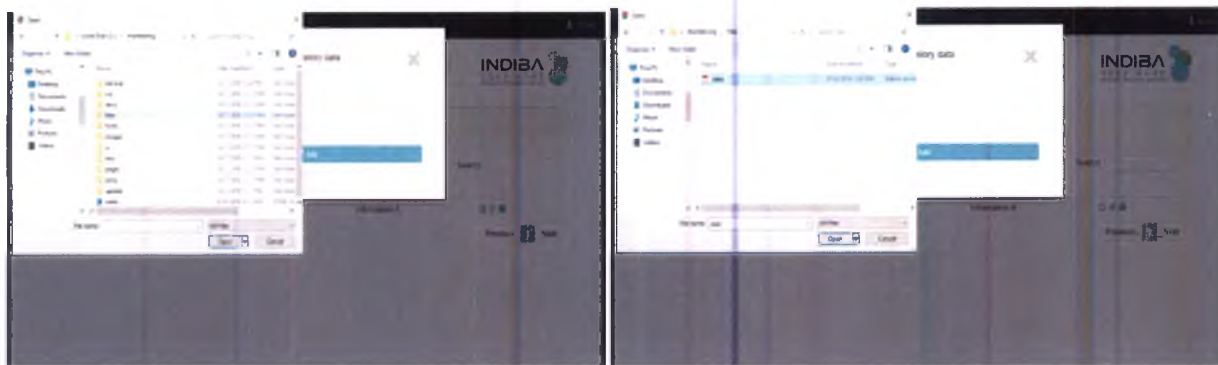

After that, the entry will look like this:

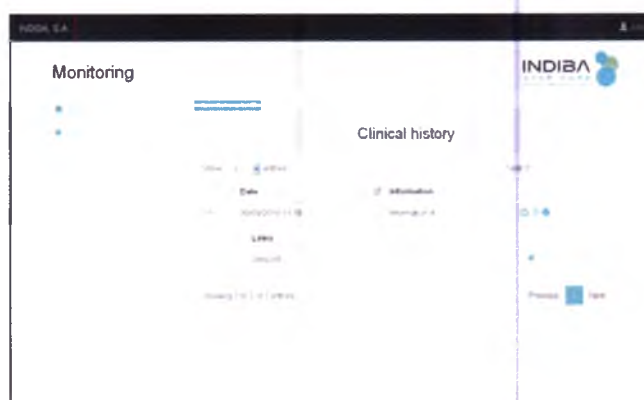


To delete an entry, all related files must be deleted first. If the required plug-in is installed in the browser, file links will open in a new window.

IMPORTANT: If a link to a file is deleted from the database, the linked file is NOT deleted from the computer. Files can only be permanently deleted in the folder in which they were saved.

1. Manual tuning

To perform the procedure for the patient without entering information about him into the program and provide a report on the procedure, click "Manual settings" - Manual setting. As shown in the following figures, the procedure is the same as the procedure for the saved patient.

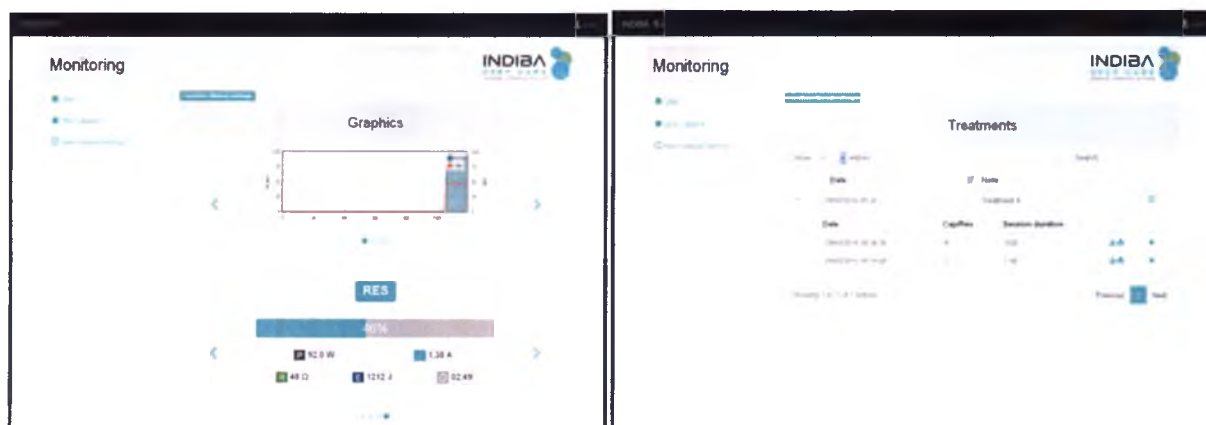


IMPORTANT: This procedure will not be saved in the shared database and will be lost when the user returns to the start screen or clicks "New manual settings" - New manual setting.

1. Printing

5.1 INSERTING A PERSONALIZED LOGO

The logo must be in jpg format and located in the “Images” folder (inside the “monitoring” folder) with the name logo.jpg. If the file height exceeds 100 points, the browser proportionally adapts the size.

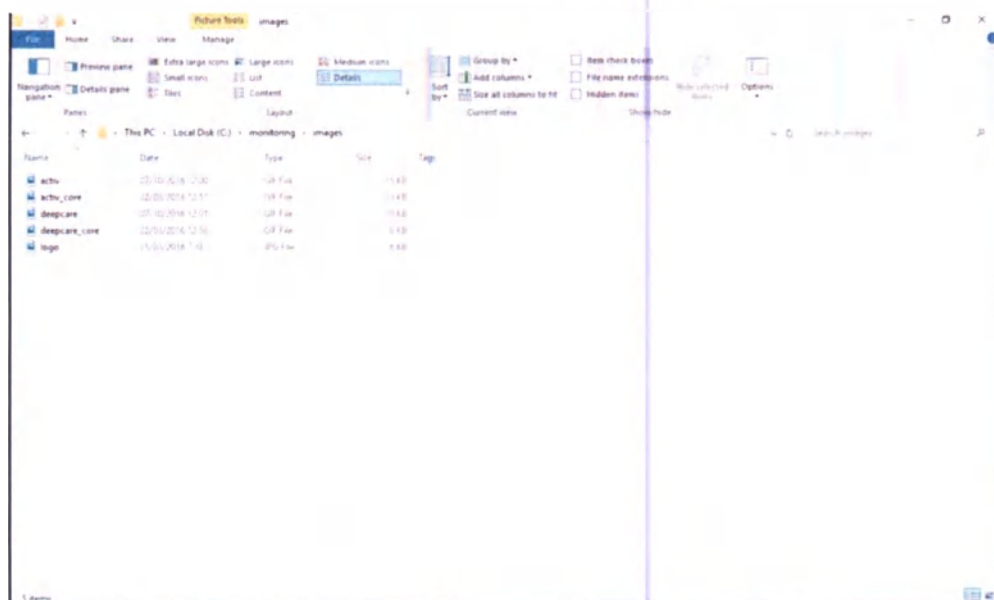

The same image will be used in three reports prepared by the program.

5.2 PRINTING A HISTORY

Click on the icon in the desired history entry and the following screen will appear:




Click “Print” - Print, and a menu appears with a list of available printers.

IMPORTANT: The “Print” button will not be displayed on the printed document.


5.3 PRINTING STATE

To print the status, click "Print" on the status screen. The following screen will be displayed:

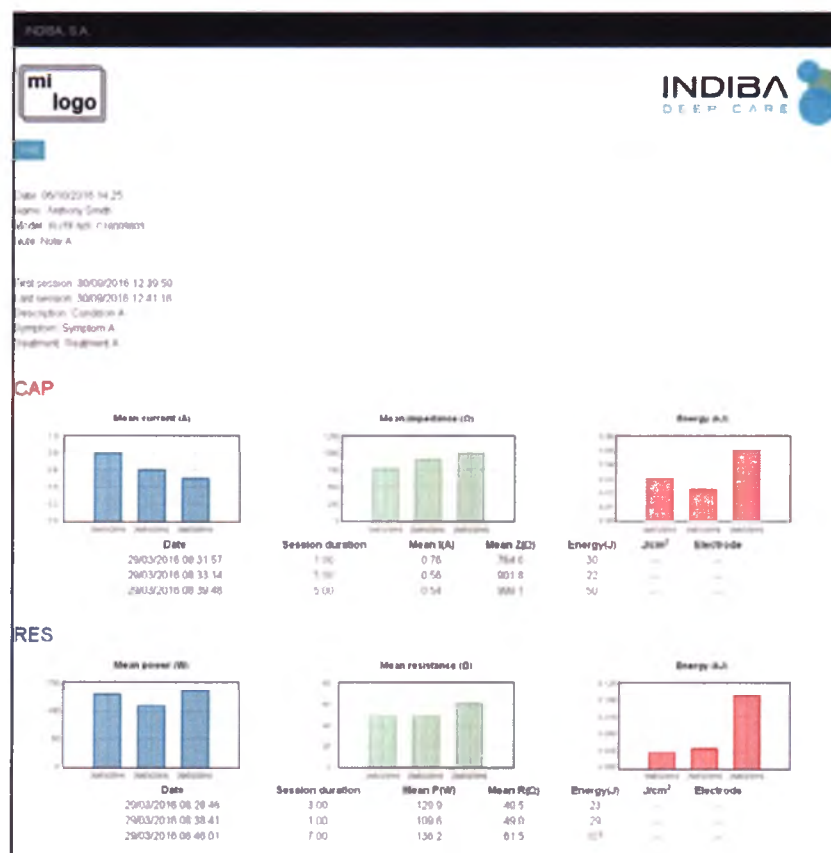

5.3 PRINT STAGES


The following are sample reports for resistive and capacitive modes.

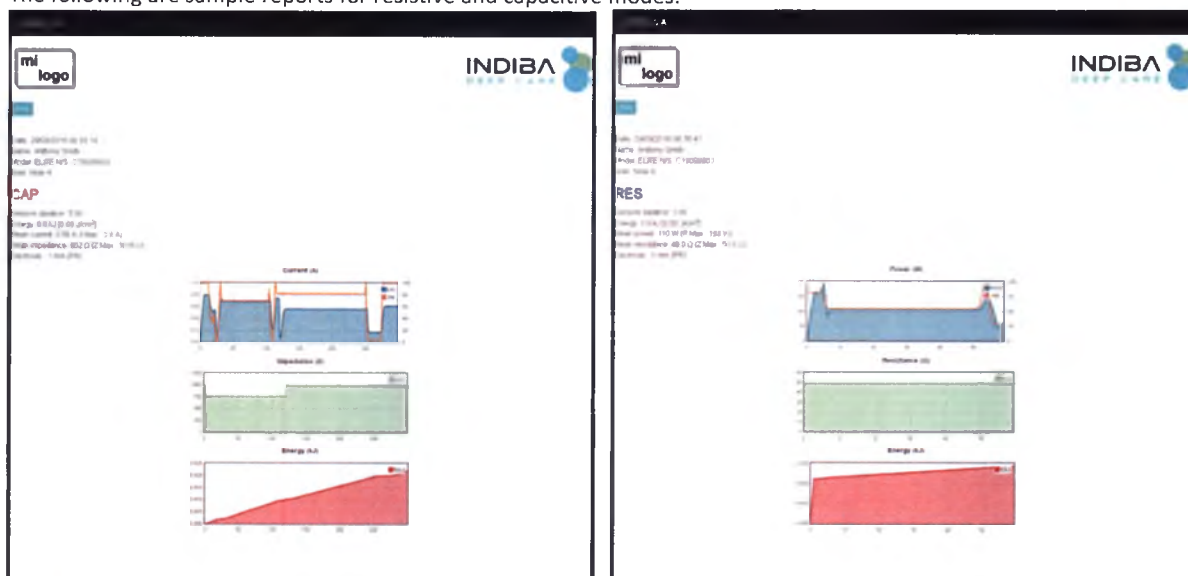

7 Data

6.3 EXPORT DATABASE

Database backups should be done regularly to avoid any potential data loss. Warning message "ATTENTION! Remember to make a backup "will be displayed every fifteen days if a copy has not been made.

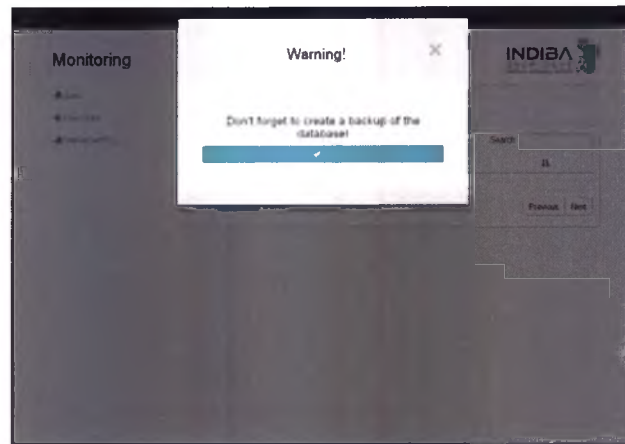

IMPORTANT: The program displays only a message; automatic copying is not performed.


To make a copy, go to the data menu, click "Export DB" - Export DB (database), and a pop-up menu will appear.

Depending on the browser, the user will be asked to save the database in the program folder or use the default browser folder. It is recommended to save the file in the backup subfolder in the Monitoring folder so that it can be easily found if necessary.

IMPORTANT: The file name indicates the date the copy was created in the DDMMYY format.

6.3 DATABASE IMPORT

In order to export the database from another device, or restore the data, you can import the database. To do this, click on the "Import DB" - Import Database button, and the following screen will appear:

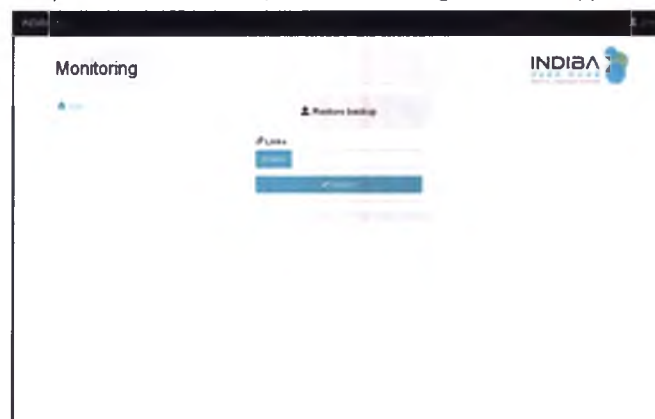


22

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА


Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª, DOY FE.

Handwritten signature

Click "Browse" - Browse to select a file to import the database. If the recommendations were followed, the file will be located in the "backup" subfolder in the folder where the monitoring program was installed.

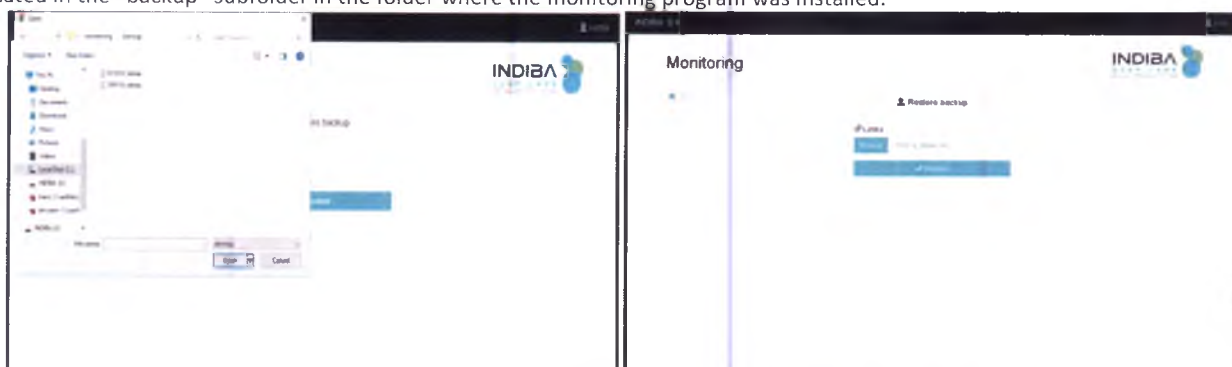


After the file is selected, you must click on the "Restore" button - Restore, the following confirmation screen will appear:

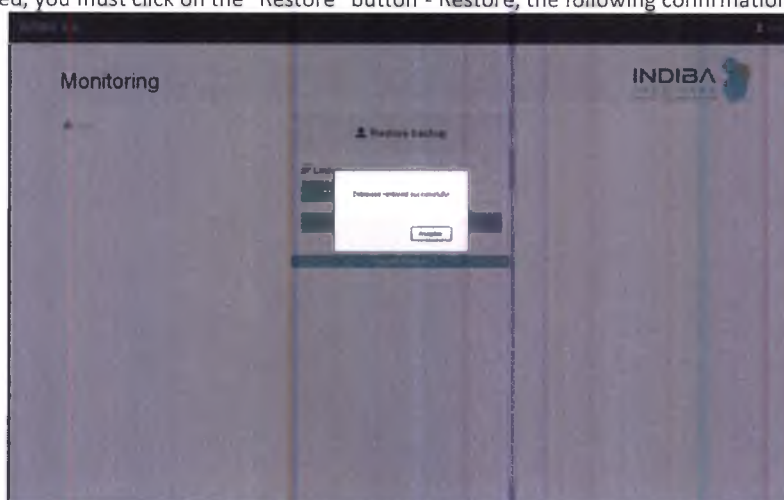

IMPORTANT: after import, the new database will be overwritten on top of the old.

6.3 COMBINING DATABASE

This function was created for a situation when there are two monitoring programs on different devices. To combine these databases together on one device, the corresponding file must be exported, and then received and saved on another device. The subsequent steps are similar to those described in the previous section, and the user will receive confirmation on the screen if the process was successfully completed.

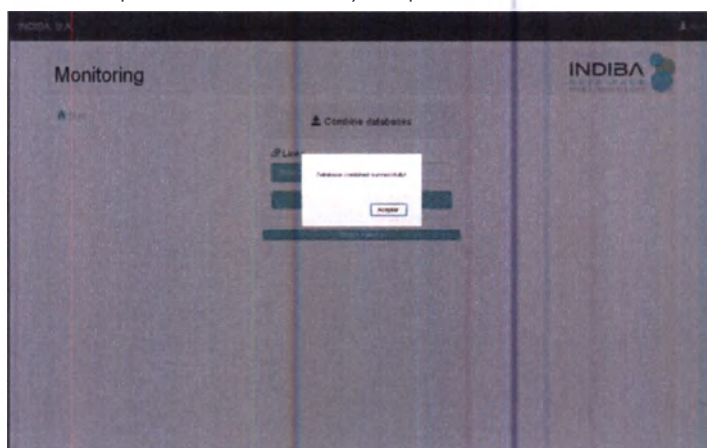


7 Protocols

The protocol menu allows you to import and export protocols created by the user on the computer, and vice versa.


6.3 EXPORT OF THE PROTOCOL

The tab "Export protocol" is used to send the user protocol from the computer to the machine. To do this, follow these steps:


1. Press the "Browse" button and select the folder for sending the program to the computer.

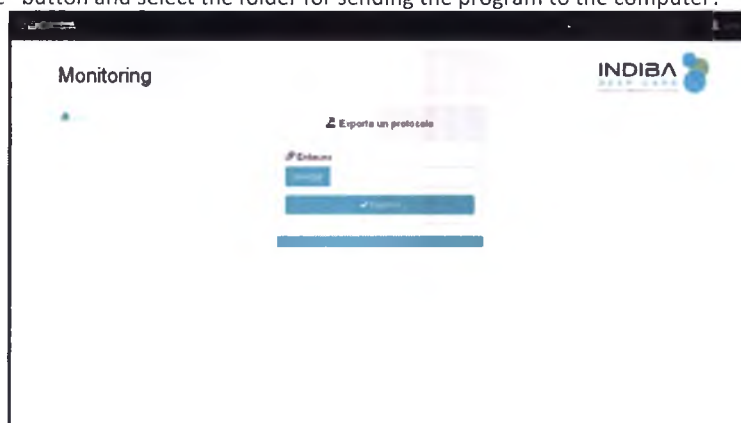

2. On the device, open the page with user-saved procedures.

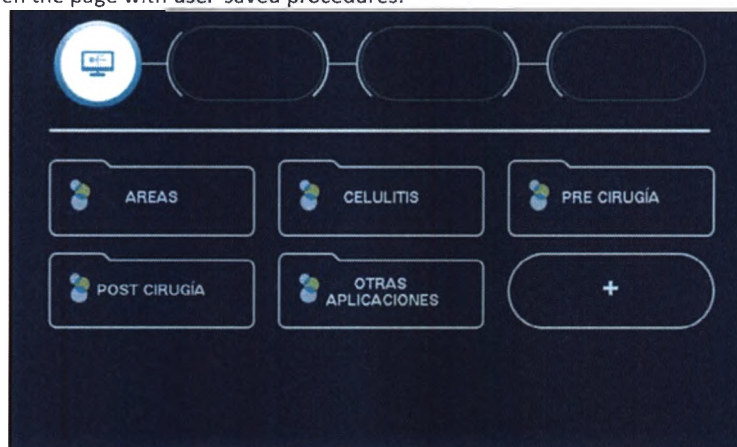


3. In the monitoring program, click the "Export" button. In a few seconds you will see a new program on the screen, its name is "TEST EXPORT".

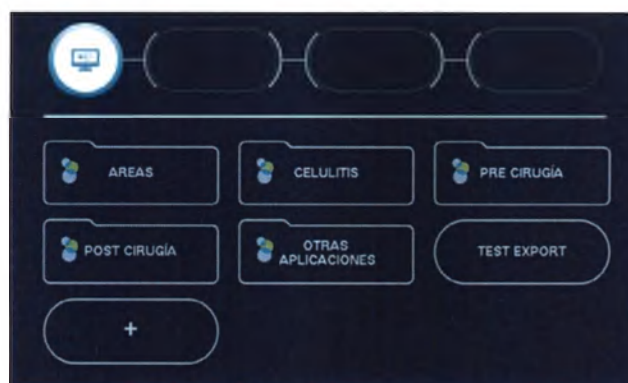


6.4 IMPORT OF THE PROTOCOL

The "Import protocol" tab is used to send the user protocol from the device to the computer. To do this, follow these steps:

1. On the device, select which program you want to transfer to the computer (in this case, a fake program called "TEST IMPORT" was used).

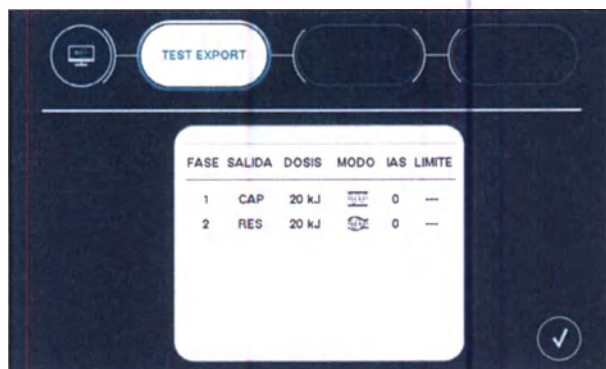

2. In the monitoring program, click "Save" - Save.

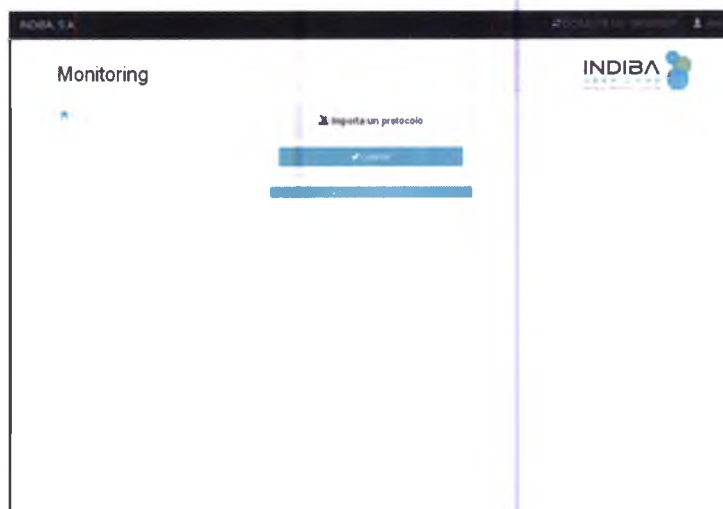

3. Next, a pop-up window will appear to start the download. The file will be downloaded to the "Downloads" folder of your browser on your computer.

The difference IS Indiba

MANUFACTURER

INDIBA, S.A. ("Indiba S.A.", Spain)

C/ Moianès, 13

Pol. Ind.

Casablanques

08192 Sant

Quirze del Vallès

Barcelona

(Spain)

Phone: +34 93 265 55 22

Fax: +34 93 576 30 40

www.indiba.com


CE

Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE.



PROTOCOLS

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

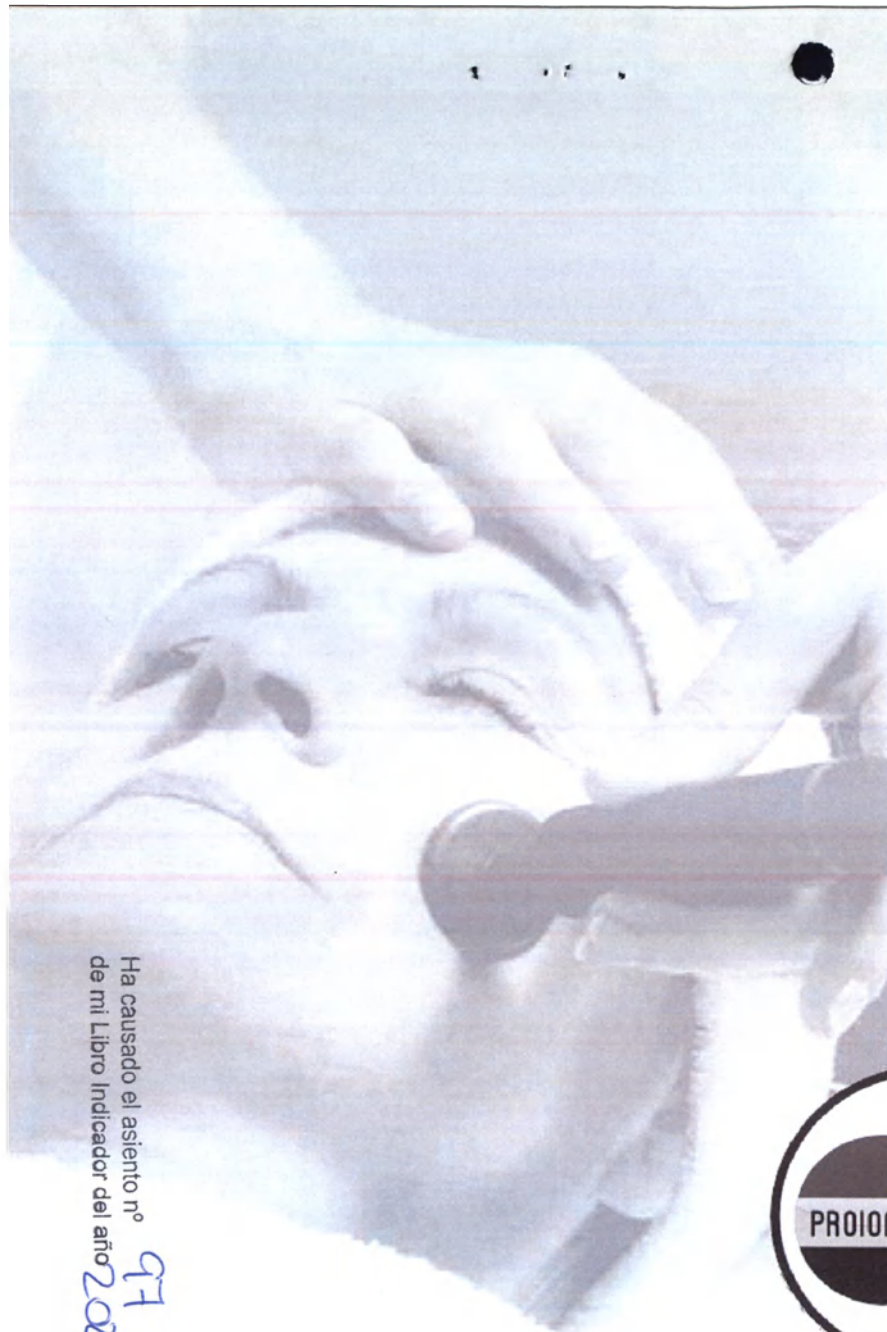

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª
DOY F.



BEFORE THE OPERATION


INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

BEFORE THE OPERATION

NECK AND FACE (30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Preparation of tissue for surgery, increased blood flow and oxygenation.

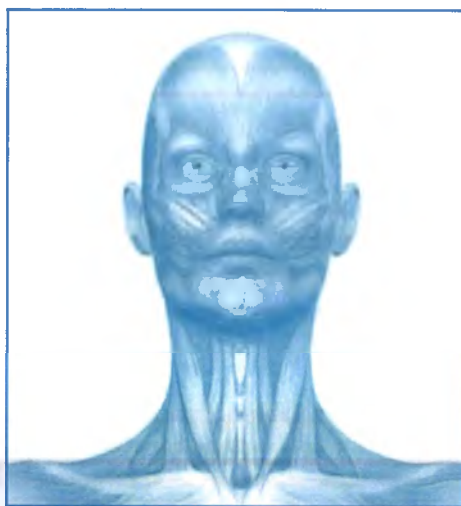

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 12 min IAS* 7

RES 12 min IAS* 7

CAP 6 min IAS* 3

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

Two times a week

Total: 4 sessions

NOTES

If other products are required, use them after the procedure.

* IAS = INDIBA analogue scale

Ha causado el asiento nº 914 Sección 2ª de mi Libro Indicador del año 2020 - DOY FE

NECK AND FACE (30 min)

USED PRODUCTS

Conductive Cream Face Cream
Conductive Cream Care Cream
Face cream (not included)

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.


COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

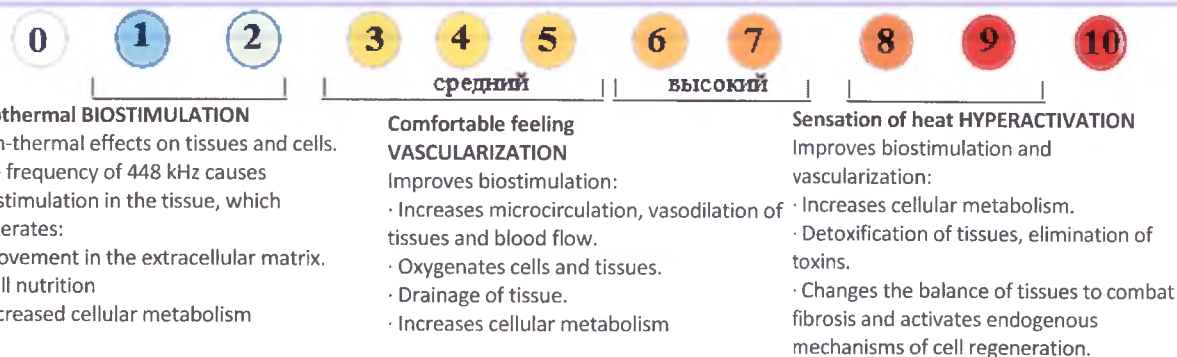

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part, without the prior written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ARM (30 min)

Preparation of tissue for surgery, increased blood flow and oxygenation.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 5 min IAS* 7

RES 5 min IAS* 7

CAP 5 min IAS* 3

(fixed in the palm of your hand)

Each hand

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

Two times a week

Total: 4 sessions

NOTES

If other products are required, use them after the procedure.

* IAS = INDIBA Analogical Scale

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure if it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

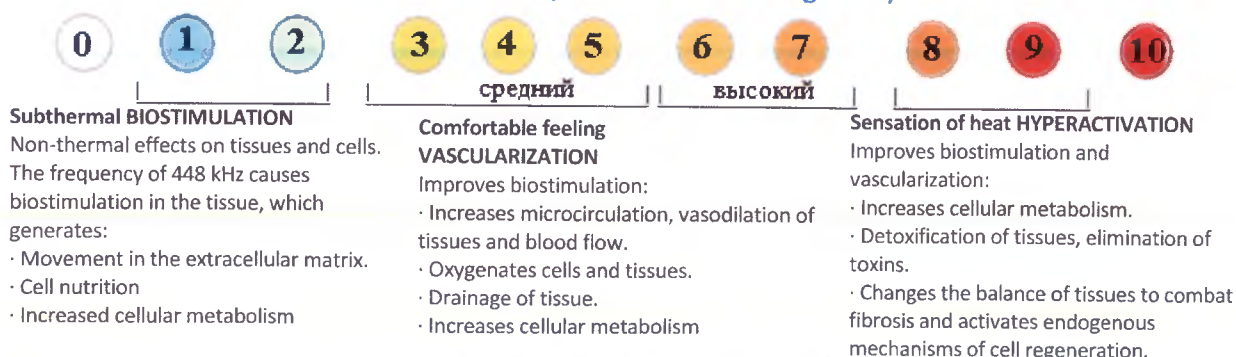

CHEST (30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Preparation of tissue for surgery, increased blood flow and oxygenation.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 5 min IAS* 7

RES 5 min IAS* 7

CAP 5 min IAS* 3

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

Two times a week

Total: 4 sessions

NOTES

If other products are required, use them after the procedure.

* IAS = INDIBA Analogical Scale

Ha causado el asiento n°
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª
DOY FE

CHEST

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FROGONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

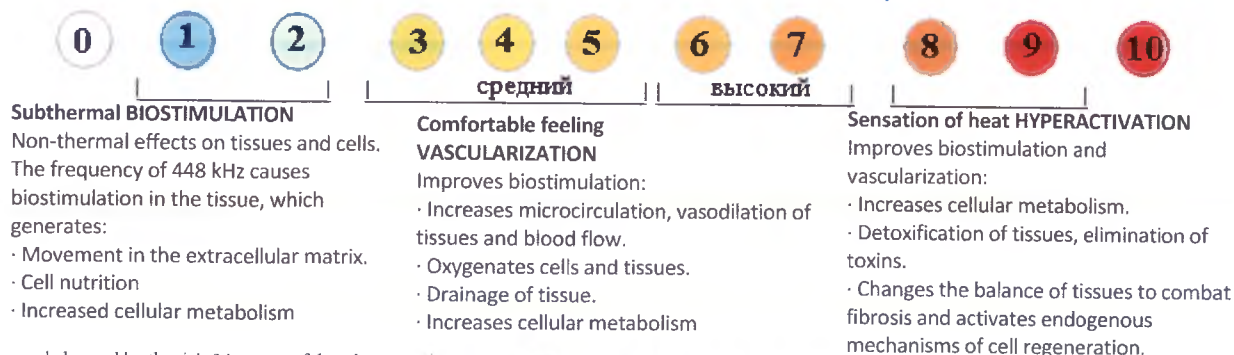

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A. измeнeнeй, рaспрoстpaнeнeй или пeрeдaвaтeль, eгo бeз пpeдвapитeльнoгo coглaсeния c INDIBA, S.A., выпyщeннoгo в письмeннoй фoрмe. Всe нapyшeния бyдyт прeдвoдeны пo зaкoнy.

ABDOMEN (20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Preparation of tissue for surgery, increased blood flow and oxygenation.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode in the lumbosacral region.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 7 min IAS* 7

RES 8 min IAS* 7

CAP 5 min IAS* 3

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

Two times a week

Total: 4 sessions

NOTES

If other products are required, use them after the procedure.

** IAS = аналоговая шкала INDIBA*



Ha causado el asiento n°
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

ABDOMEN

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

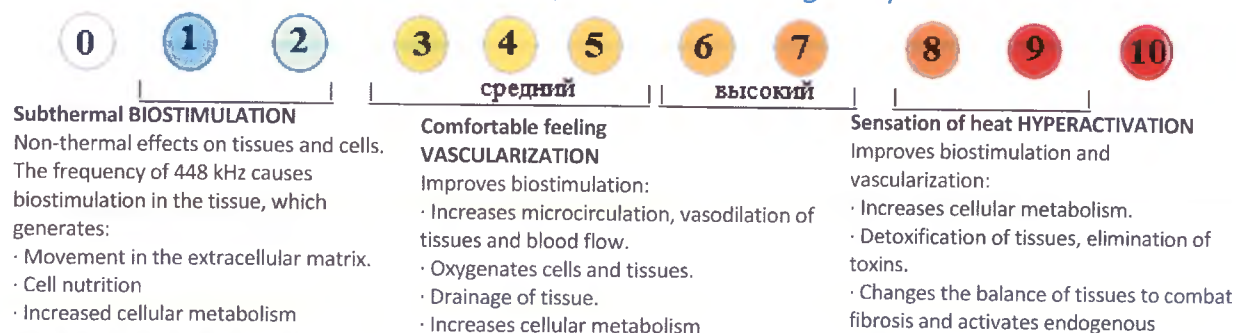

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A. Выпущено в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

LEGS (40 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Preparation of tissue for surgery, increased blood flow and oxygenation.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 9 min IAS* 7

RES 9 min IAS* 7

CAP 2 min IAS* 3

(fixed on the sole)

Each leg

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

Two times a week

Total: 4 sessions

NOTES

If other products are required, use them after the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97
2020 . DOY FE

Sección 2ª

LEGS

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

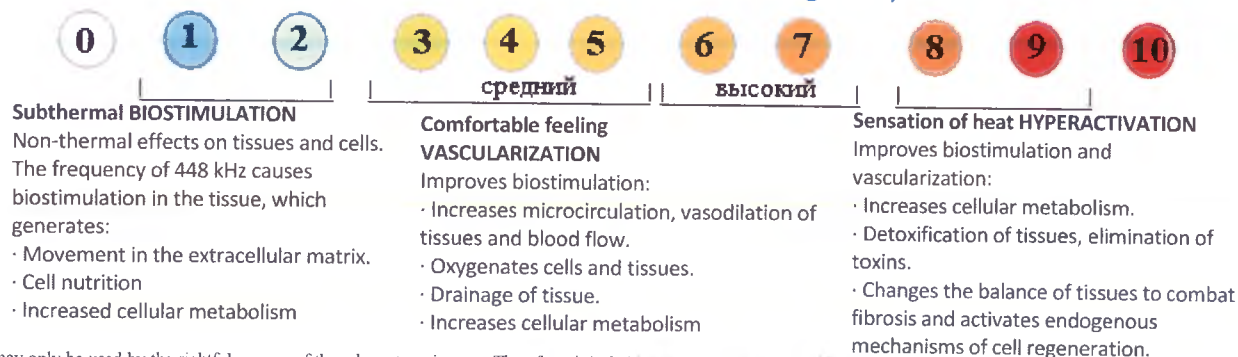

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

POST- SURGERY

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97
2020

Sección 2ª
DOY EE

CHEST (30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Anti-inflammatory and decongestant treatment. Acceleration of the healing process. Tissue elasticity.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 28 min IAS* 4-5

from each side

CAP 2 min IAS* 1

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line in the capacitive mode of the procedure. Ability to use at local drainage points.

SESSIONS

Once a week

Total: 4-5 sessions

NOTES

Treatment begins after suturing. In cases of sagging skin, it would be advisable to continue with the protocol from the group "Skin Tightening"

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания.

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª.
DOY FE:
97

CHEST

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure if it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

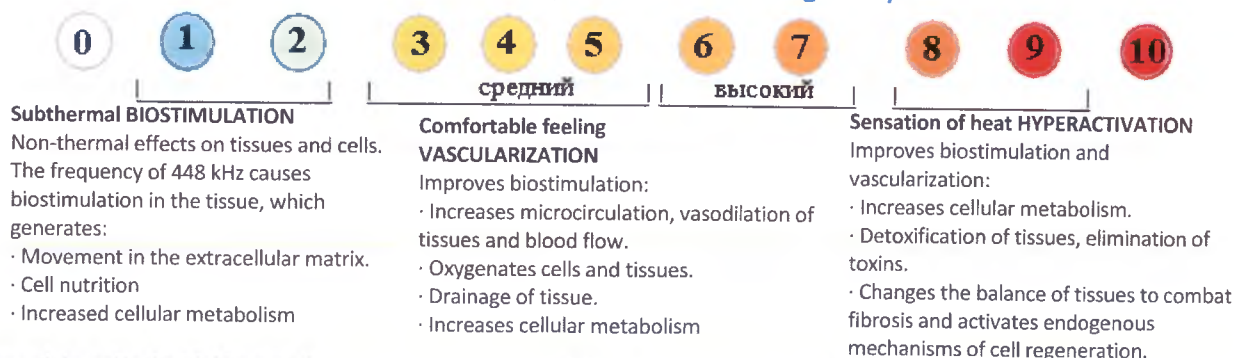


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part, to change, disseminate or copy it without the prior written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

BREAST IMPLANT INCAPSULATION_(30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FRIGONIC SYSTEM

Лечение с целью уменьшения фиброза.

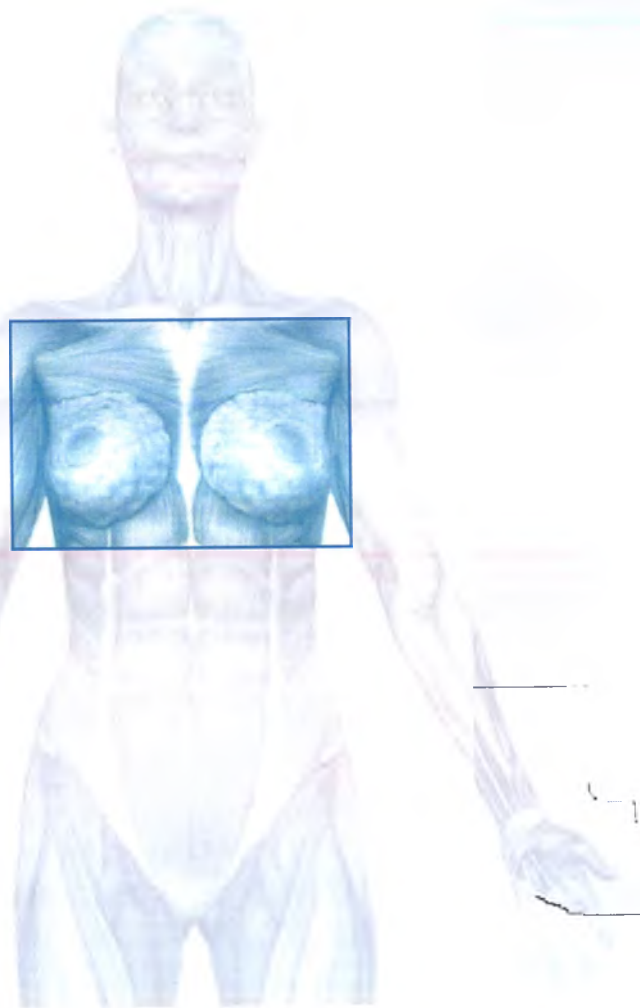

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 3 min IAS* 5

RES 10 min IAS* 5 EACH BREAST

CAP 2 min IAS* 3

APPLICATION DATA

Use at local drainage points.

SESSIONS

One or Two times a week

Total: 6 sessions to eliminate fibrosis

NOTES

Treatment begins after the appearance of periprosthetic fibrosis

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2010. DOY FE

Sección 2ª

BREAST IMPLANT INCAPSULATION

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure if it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

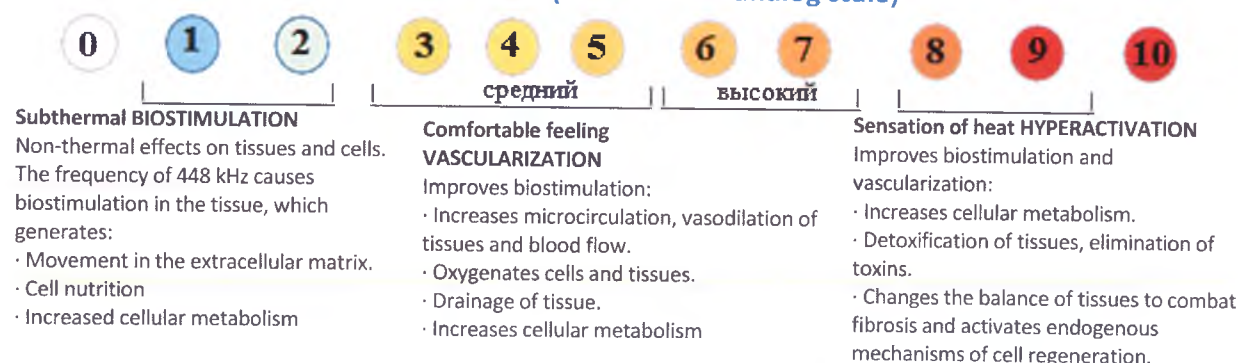


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

MAMMOPLASTY (30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Противоотечное и обезболивающее лечение.

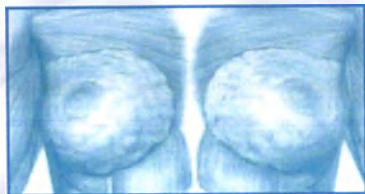

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 2 | EACH BREAST
CAP 5 min IAS* 1

APPLICATION DATA

Perform drainage movements and scars according to protocol

SESSIONS

Two times a week

Total: **6 sessions**

NOTES

It is also advisable to treat the cervical and dorsal spine to reduce stress after muscle surgery.
Increase IAS to 5 during the subacute phase.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOYEE

MAMMOPLASTY

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

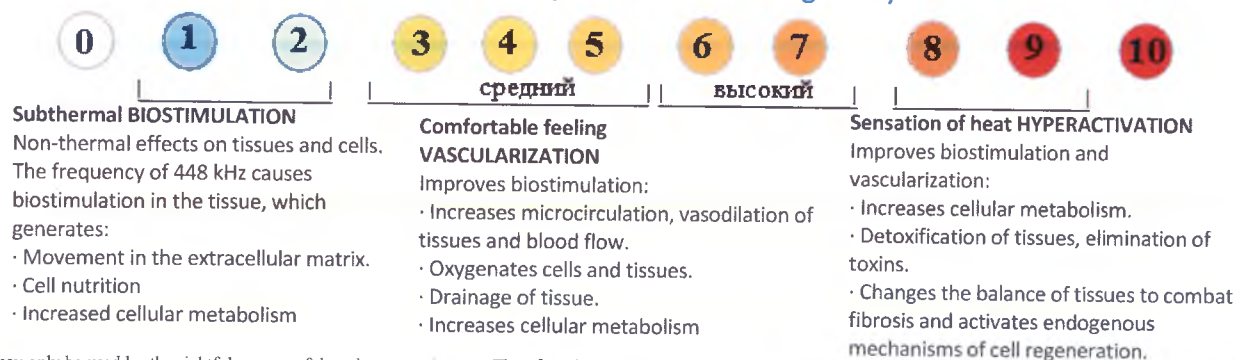

POST LIPOSUCTION

1 PART (20 - 40 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Реабсорбция синяков и гематом и гомогенизация области.



POSITION

Lying on the back: a return flat electrode on the lumbosacral region

Lying on the abdomen: return flat electrode on the abdominal cavity

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 18 - 38 min **IAS*** 3 (depending on the size of the treatment area)

RES 2 min **IAS*** 3 (fixed on the sole of the foot in the treatment of feet)

APPLICATION DATA

Performing movements in the direction of drainage. It is possible to use at local drainage points.

SESSIONS

One-Two times a week

Total: 4-6 sessions

NOTES

During the procedure, it should be noted that hematomas can change color. Nodules after liposuction, palpable palpation, quickly normalize

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
2020. DOY FE

POST LIPOSUCTION 1 ЧАСТЬ

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

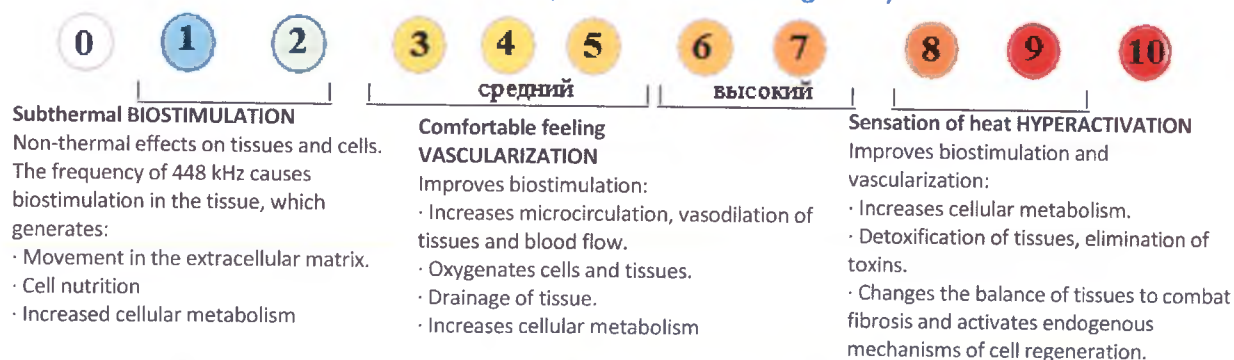

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

POST LIPOSUCTION

2 PART (20 - 40 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Treatment of sagging skin and fibrosis that remain after surgery.



POSITION

Lying on the back: a return flat electrode on the lumbosacral region

Lying on the abdomen: return flat electrode on the abdominal cavity

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 8 - 18 min IAS* 5 (depending on the size of the treatment area)

RES 10-20 min IAS* 7 (depending on the size of the treatment area)

RES 2 min IAS* 3 (fixed on the sole of the foot in the treatment of feet)

APPLICATION DATA

Performing movements in the direction of drainage. It is possible to use at local drainage points.

SESSIONS

Two times a week

Total: 10 sessions

NOTES

During the procedure, it should be noted that hematomas can change color. Nodules after liposuction, palpable palpation, quickly normalize

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOYFE

[Signature]

POST LIPOSUCTION 2 PART

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

PRODUCTS USED

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure if it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

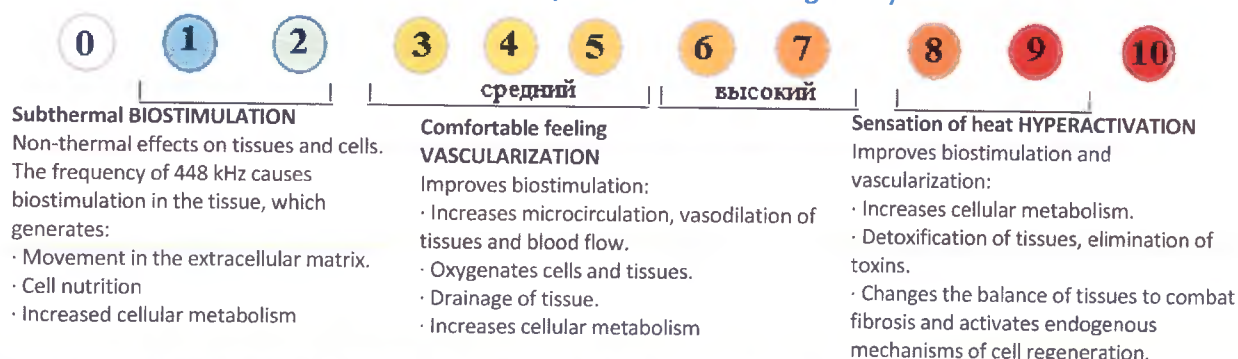

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

RECENT SCARS (15 - 20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Anti-inflammatory, decongestant and analgesic treatment.



POSITION

Lying on the back: a return flat electrode on the lumbosacral region

Lying on the abdomen: return flat electrode on the abdominal cavity

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 - 15 min IAS* 3 (depending on the size of the scar)

CAP 5 min IAS* 1

APPLICATION DATA

Slow and smooth movements

SESSIONS

One or Two times a week

Total: 6 sessions

NOTES

If there are sutures, do not carry out the procedure directly on the scar, treat the area around

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020

97

Sección 2ª,
DOY EF

RECENT SCARS

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

PRODUCTS USED

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure if it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

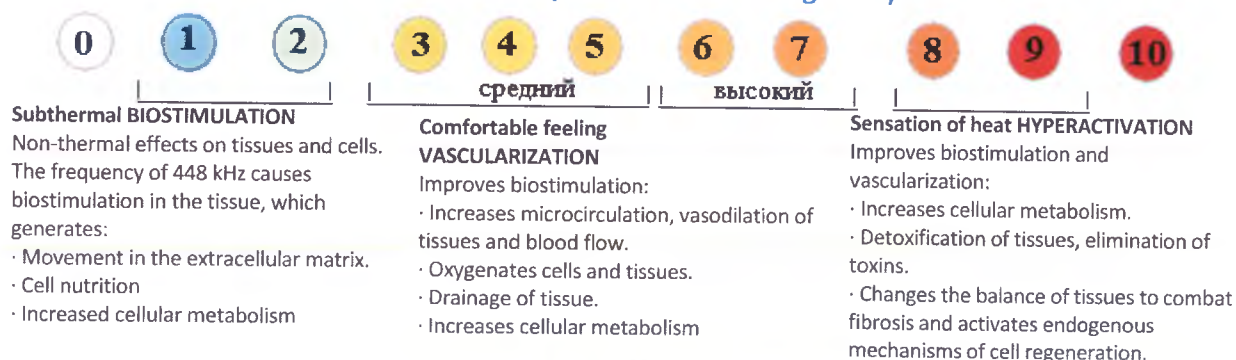

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

KELOID AND HYPERTROPHIC SCARS(10 - 20 min)

Anti-inflammatory, decongestant and analgesic treatment.

POSITION

Lying on the back: a return flat electrode on the lumbosacral region

Lying on the abdomen: return flat electrode on the abdominal cavity

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 3 - 5 min IAS* 7 (depending on the size of the scar)

RES 5-13 min IAS* 7

CAP 2 min IAS* 3

APPLICATION DATA

Massage during a resistive treatment

SESSIONS

Once a week

Total:6 sessions

NOTES

Teach patient to do warm-up massage at home

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Юнко, Cirugía Plástica y Estética, г. Барселона, Испания



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE

Sección 2ª

KELOID AND HYPERTROPHIC SCARS

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream или
Conductive Cream Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants


Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

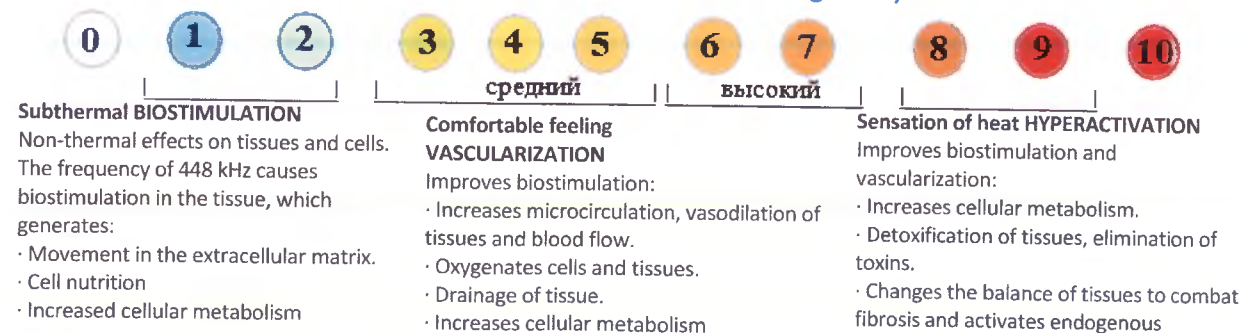

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

BLEFAROPLASTY (20 min)

Decongestant, analgesic treatment to speed healing.

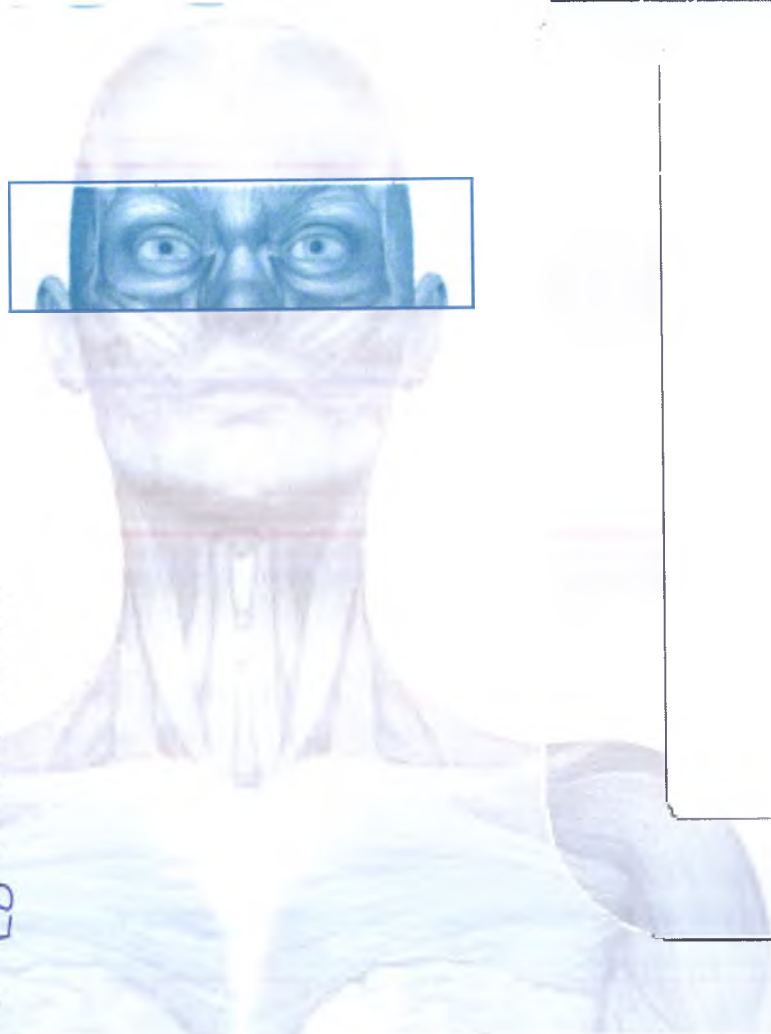

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 8 min IAS* 3
RES 2 min IAS* 1 | EACH EYE

APPLICATION DATA

Slow, smooth movements in the direction of the temples and knots.

SESSIONS

Once a week
Total: 6 sessions

NOTES

If the RES electrode is uncomfortable for the patient, do not use it in initial sessions

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Conductive Cream Care Cream или
Conductive Cream Face Cream

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result.

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средний			высокий				
Thermal BIOSTIMULATION non-thermal effects on tissues and cells. frequency of 448 kHz causes stimulation in the tissue, which operates: - Improvement in the extracellular matrix. - Full nutrition - Increased cellular metabolism			Comfortable feeling VASCULARIZATION Improves biostimulation: - Increases microcirculation, vasodilation of tissues and blood flow. - Oxygenates cells and tissues. - Drainage of tissue. - Increases cellular metabolism					Sensation of heat HYPERACTIVATION Improves biostimulation and vascularization: - Increases cellular metabolism. - Detoxification of tissues, elimination of toxins. - Changes the balance of tissues to combat fibrosis and activates endogenous mechanisms of cell regeneration.		

Rhinoplasty (20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Decongestant, analgesic treatment to speed healing.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 15 min IAS* 3

RES 5 min IAS* 1

APPLICATION DATA

Slow, smooth movements in the direction of the nodes.

SESSIONS

One-Two times a week

Total: 6 sessions

NOTES

If the RES electrode is uncomfortable for the patient, do not use it in initial sessions

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97 Sección 2ª,
2020 DOY FE.

[Signature]

RHINOPLASTY

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive CreamCare Cream или

Conductive CreamFace Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

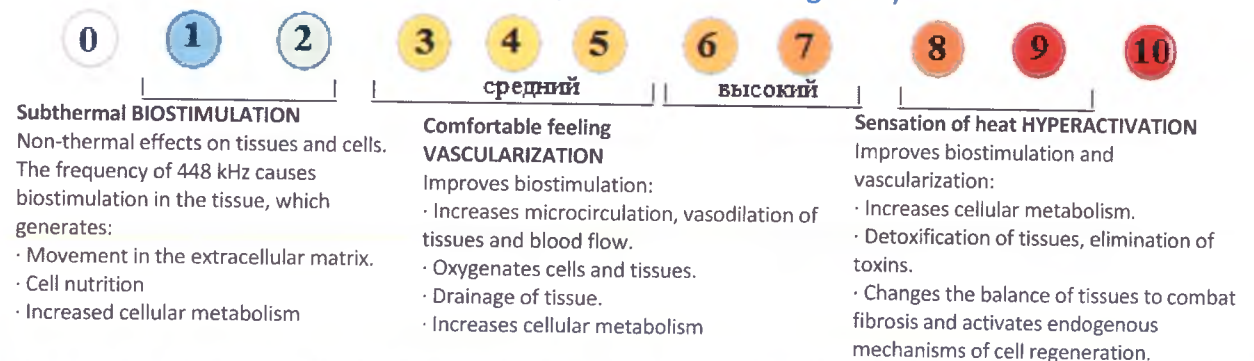


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Выпускено в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

FACE LIFT (20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Decongestant, analgesic treatment to speed healing.

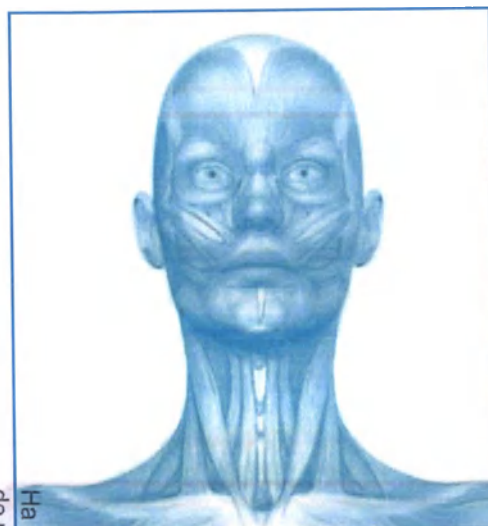

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 15 min IAS* 1

RES 5 min IAS* 1

APPLICATION DATA

Highly Slow and smooth movements

SESSIONS

Two times a week

Total: 6 sessions

NOTES

Treatment should begin three days after surgery, limiting the use of the chin, neck, face and eyelids. After carrying out the usual facial skin care procedures

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE
Sección 2ª,
2020

FACE LIFT

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream или
Conductive Cream Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

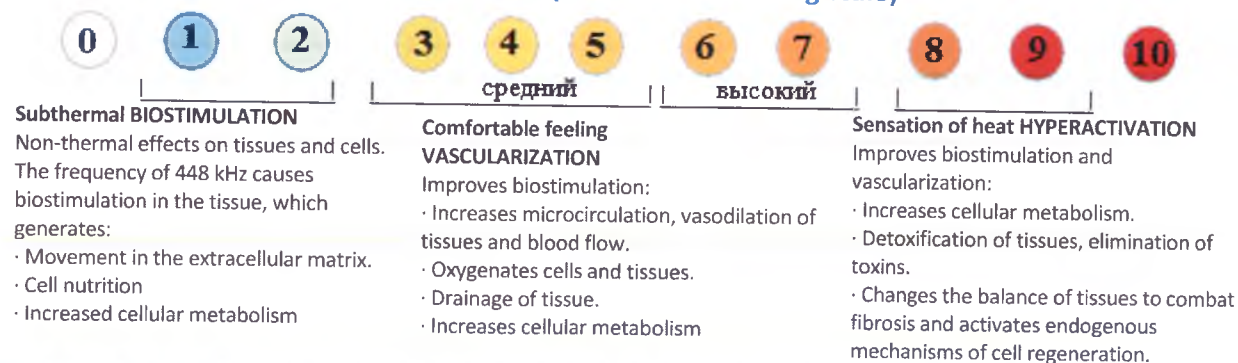

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

ABDOMINOPLASTY / LIPECTOMY (30 min)

Anesthetic and reabsorption treatment of hematomas and acceleration of the healing process.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 12 min IAS* 2

RES 12 min IAS* 3

CAP 6 min IAS* 1

APPLICATION DATA

Drainage massage. Very slow and smooth movements

SESSIONS

Two times a week

Total: 10 sessions

NOTES

Check thermal sensations in the area that has not undergone surgery, conduct scar treatment in accordance with the existing protocol.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Sección 2ª

[Signature]

ABDOMINOPLASTY / LIPECTOMY

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure..


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

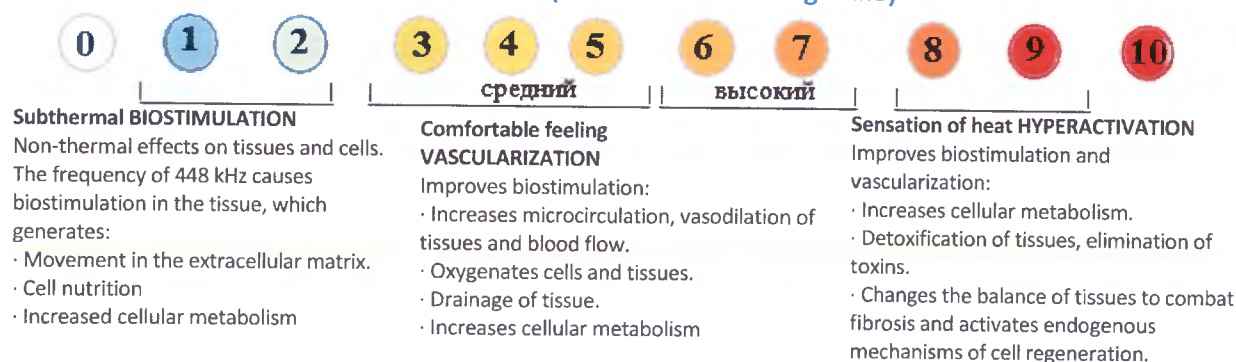

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A..

SKIN LIFT

SKIN LIFT

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020


Sección 2ª,
DOY FE

Redo

FACE AREA(30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Лечение дряблости кожи, улучшение выражения лица и эластичности, уменьшение морщин и лицевых борозд и улучшение овала лица

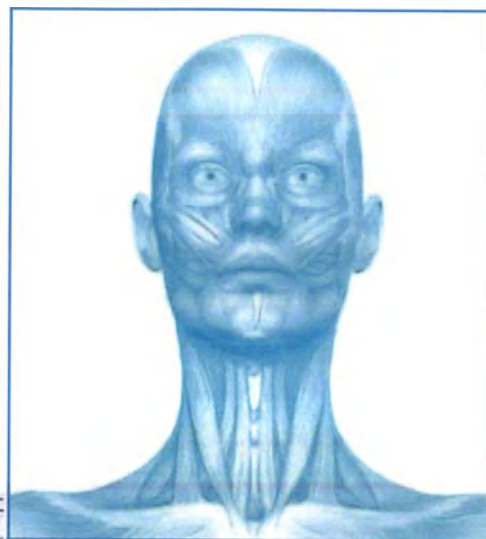

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 14 min IAS* 7

RES 10 min IAS* 6

RES 6 min IAS* 5

APPLICATION DATA

Perform circular movements in the direction of the muscles and muscle cords. At the final stage (resistive mode) apply the methods of "tissue remodeling".

SESSIONS

Two to three times a week

Total: 6 sessions

Maintenance therapy: once a month

NOTES

In cases of rosacea, use the CAP IAS 1 electrode instead of the RES electrode

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asento nº
de mi Libro Indicador del año

97
Sección 2ª,
DOY FE
2020

FACE AREA

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive CreamCare Cream или
Conductive CreamFace Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

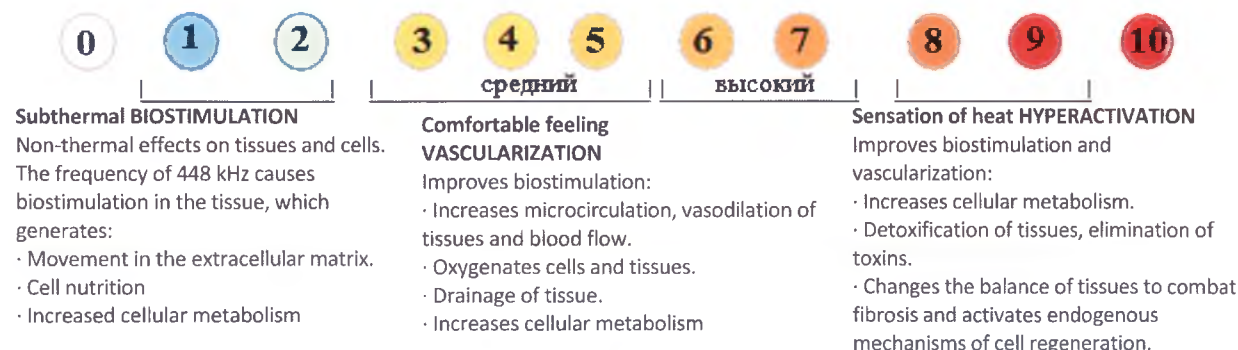

NECK AND NECK LINE (30 min)

The procedure for increasing the elasticity and firmness of the skin. Epidermis regeneration and improved vascularization.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 12 min IAS* 7

RES 12 min IAS* 7

RES 6 min IAS* 5

APPLICATION DATA

Perform circular movements in the direction of the muscles and muscle cords. At the final stage (resistive mode) apply the methods of "tissue remodeling".

SESSIONS

Two to three times a week


Total: 6 sessions

Maintenance therapy: once a month

NOTES

In cases of rosacea, use the CAP IAS 1 electrode instead of the RES electrode.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

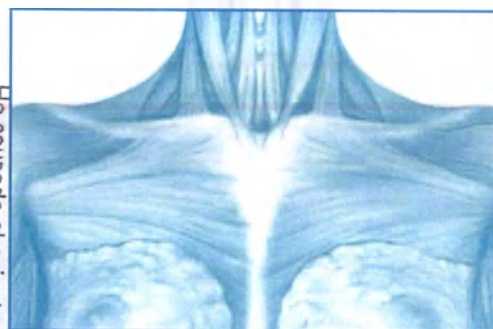

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
2010. DOY FE.

Handwritten signature

NECK AND NECK LINE

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream или
Conductive Cream Face Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

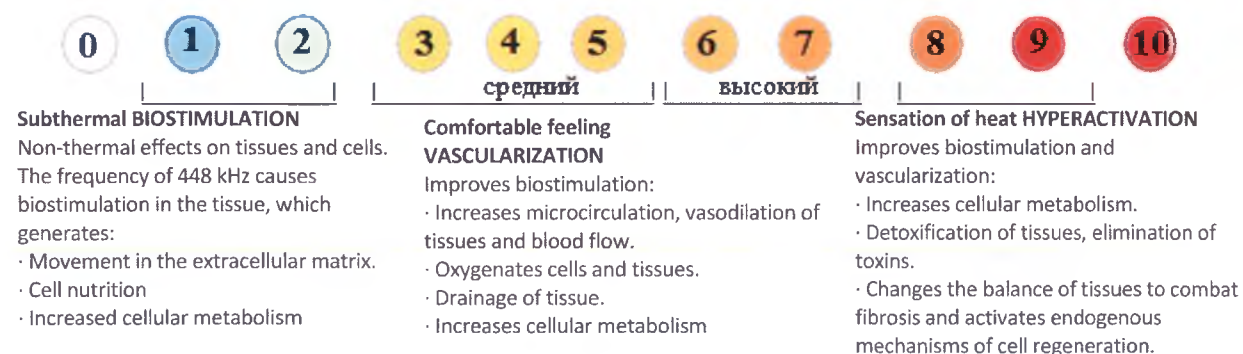

CHEST (30 min)

Treatment with the aim of lifting, improving, tightening the neckline and reducing fibrosis.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 8 min IAS* 7

RES 5 min IAS* 7

EACH CHEST

CAP 2 min IAS* 2

APPLICATION DATA

Perform circular movements in the direction of the muscles and muscle cords. At the final stage (resistive mode) apply the methods of "tissue remodeling".

SESSIONS

Дважды в неделю

Total: 6 sessions

Maintenance therapy: once a month

NOTES

If the use of cosmetics is necessary, they should be applied after the procedure

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020 - DOY FE.

Sección 2ª

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

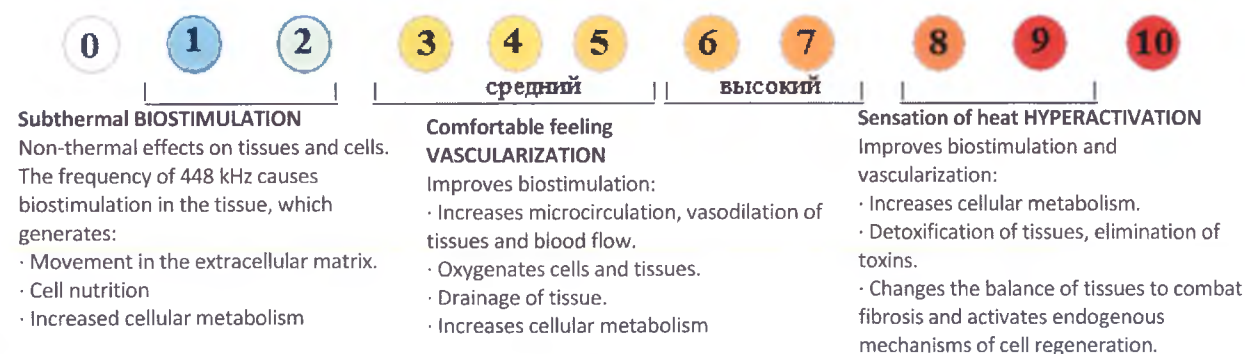

ARMS (30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FROENIC SYSTEM

Procedure for lightening the skin, reducing fat, shaping the contour of the hands and drainage.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 6 min IAS* 7

RES 6 min IAS* 7

RES 3 min IAS* 2

(fixed in the palm of your hand)

каждая рука

APPLICATION DATA

Circular movements with an emphasis on areas with a lot of fat

SESSIONS

Two times a week

Total: 6 sessions

Maintenance therapy: once a month

NOTES

If the use of cosmetics is necessary, they should be applied after the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el aslento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE
Sección 2ª

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Conductive Cream Care Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

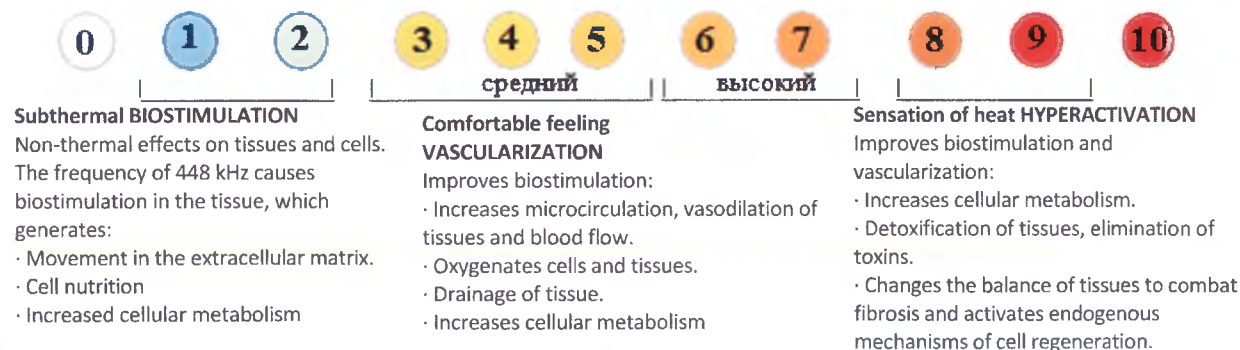

ABDOMEN (30 min)

Procedure to reduce accumulated fat, strengthen and increase skin elasticity.

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode between the blades.

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 16 min IAS* 8

RES 10 min IAS* 8

RES 4 min IAS* 2

APPLICATION DATA

Circular movements in areas of predominant accumulation of body fat. At the final stage (resistive mode), perform lymphatic drainage massage of the abdomen area.

SESSIONS

Two to three times a week


Total: 12 sessions

Maintenance therapy: once a month

NOTES

If the use of cosmetics is necessary, they should be applied after the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

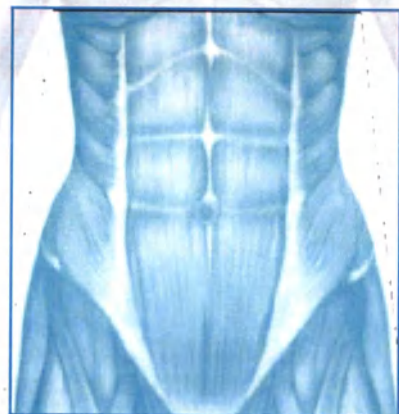

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE

Sección 2ª

[Signature]

ABDOMEN

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

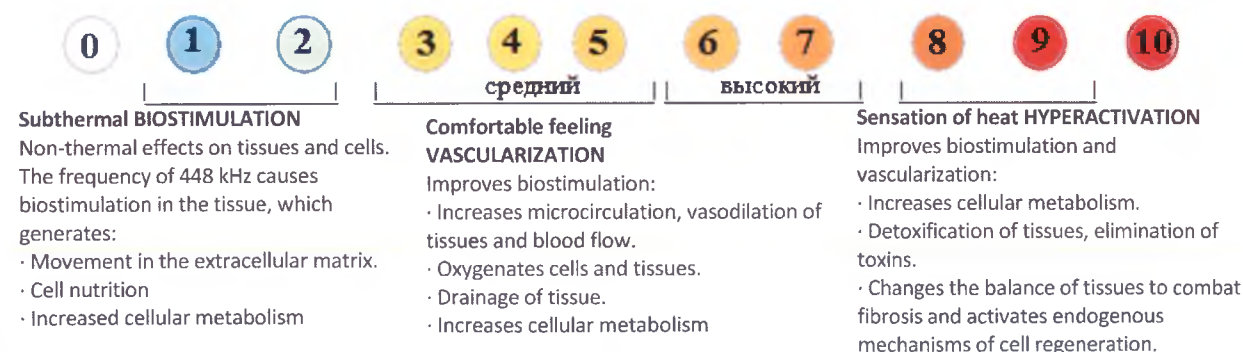

BUTTOCKS (30 min)

A procedure to improve muscle and vascular tone, strengthen the skin, reduce localized fat, improve the contour, raise the buttocks, treat elastosis and sagging.

POSITION

Lying on the abdomen. Return flat electrode on the abdomen area

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 5 min IAS* 8 | EACH BUTTOCK

RES 8 min IAS* 8 | EACH BUTTOCK

RES 4 min IAS* 2 | SACRUM

APPLICATION DATA

Circular movements with an emphasis on areas of accumulation of body fat. At the final stage (resistive mode), go to the sacral region.

SESSIONS

Two to three times a week


Total: 12 sessions

Maintenance therapy: once a month

NOTES

If the use of cosmetics is necessary, they should be applied after the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

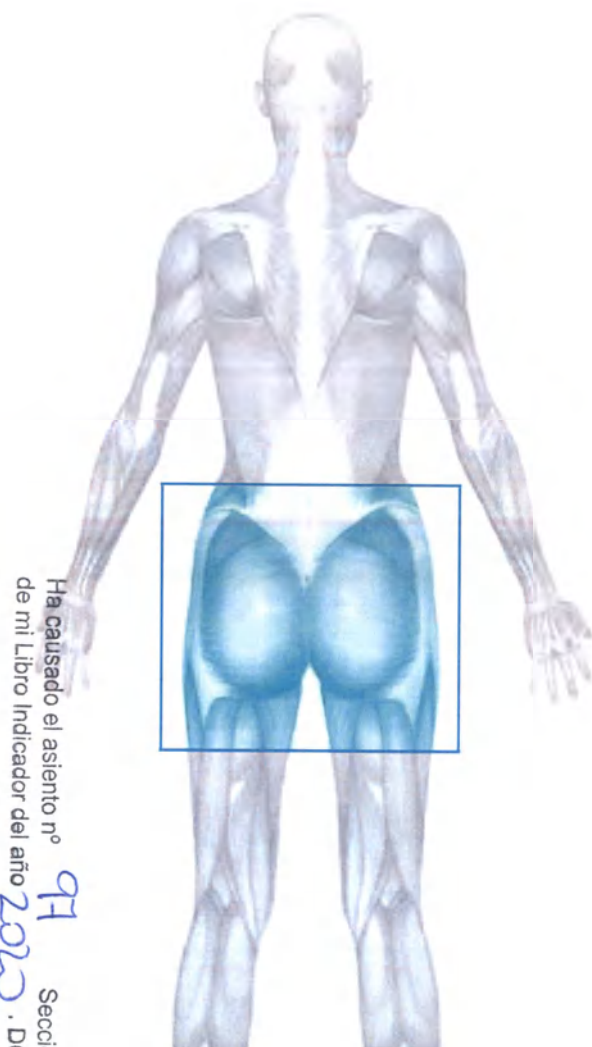

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE
Sección 2ª

BUTTOCKS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

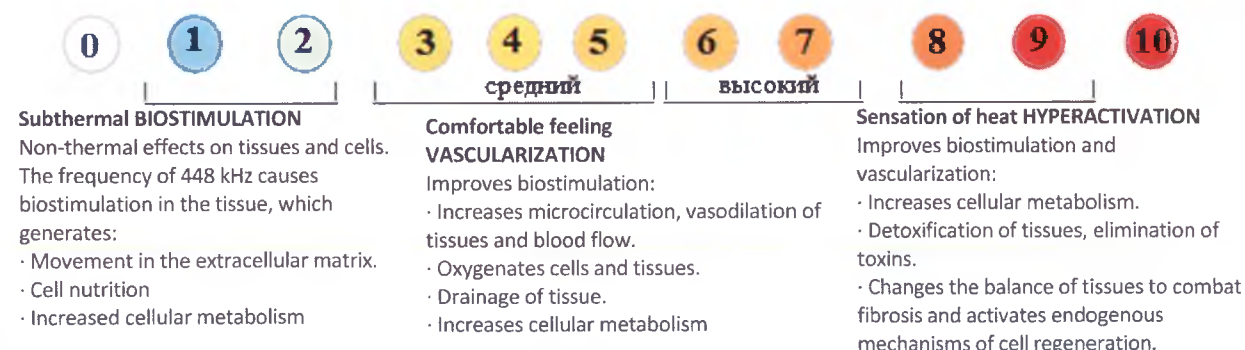

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

CELLULITE INDIBA[®] DEEP CARE MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº 97 Sección 2ª,
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.

acru

CELLULITE

The first part - lying on your back (30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Procedure to improve venous circulation, improve microcirculation, reduce swelling and increase skin elasticity



POSITION

Lying on the back: a return flat electrode on the lumbosacral region

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 2 min IAS* 6 | ABDOMEN
CAP 6 min IAS* 8
RES 3 min IAS* 8 | EACH LEG
CAP 2 min IAS* 2

(внутренняя подкожная вена)

APPLICATION DATA

Circular movements with an emphasis on areas of accumulation of body fat. From the fourth session, change the time of the CAP and RES modes, taking into account the type of cellulite.

SESSIONS

Two times a week

Total: 15-20 sessions

NOTES

In case of edematous cellulitis, apply IAS 4 locally in the legs

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020.

97

Sección 2ª,
DOY FE

Handwritten signature

CELLULITE

The first part - lying on your back



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Anticellulite
Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants


COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

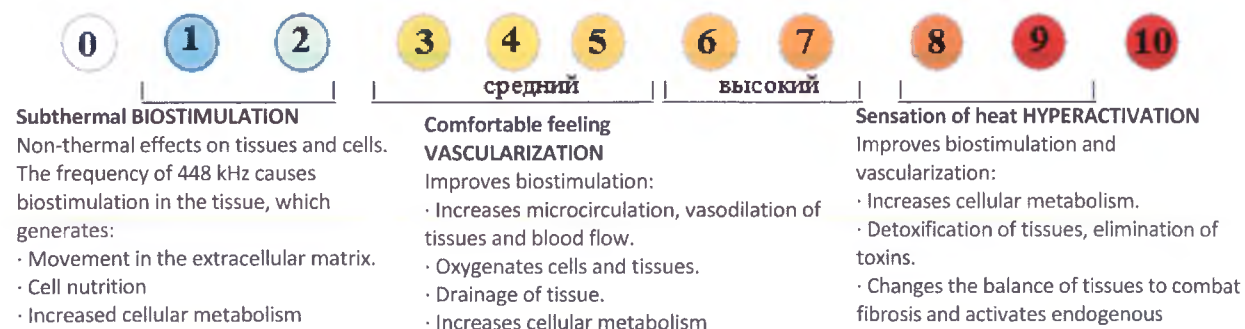


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

CELLULITE

The second part - lying on the ABDOMEN (24 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Procedure to improve venous circulation, improve microcirculation, reduce swelling and increase skin elasticity

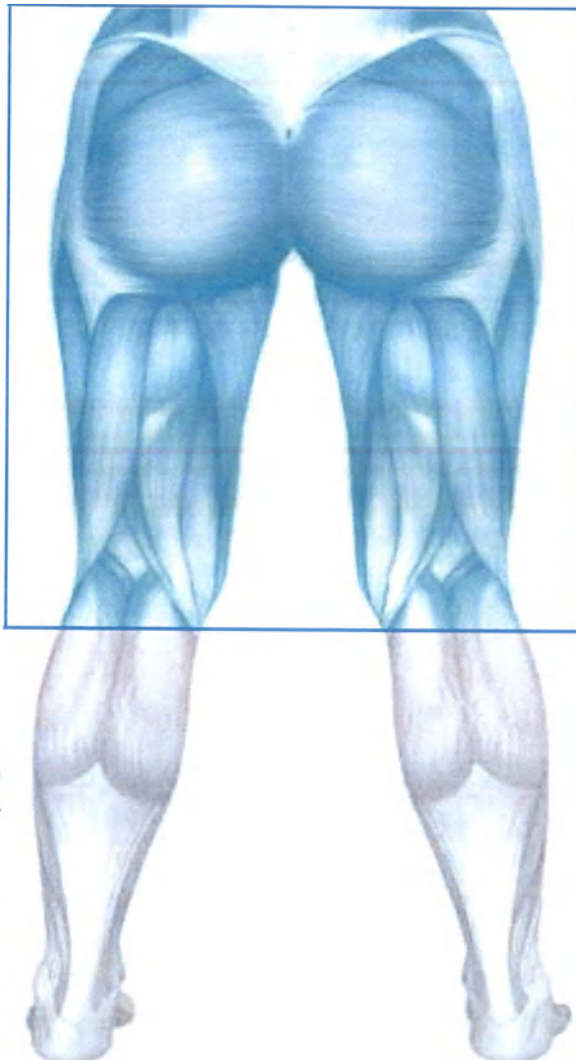

POSITION

Lying on the ABDOMEN: return flat electrode on the ABDOMEN area

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 4 min IAS* 8		
CAP 4 min IAS* 8		EVERY LEG
RES 3 min IAS* 2		
CAP 2 min IAS* 4		SACRUM

APPLICATION DATA

Circular movements with an emphasis on areas of accumulation of body fat. From the fourth session, change the time of the CAP and RES modes, taking into account the CELLULITE type.

SESSIONS

Two times a week

Total: 15-20 sessions

NOTES

In case of edematous CELLULITE, apply IAS 4 locally in the leg area

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

CELLULITE

The second part - lying on the ABDOMEN



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream или
Крем электропроводящий Anticellulite
Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

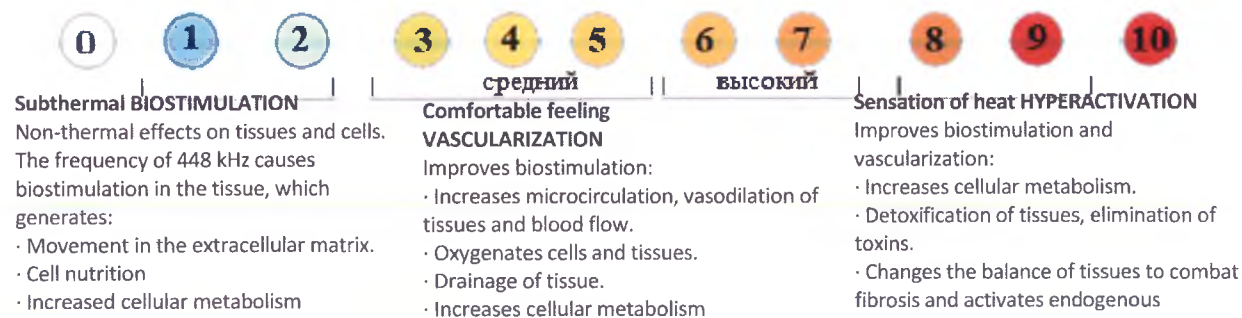

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law. *

OTHER APPLICATIONS

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª,
DOY FE

MASSAGE NOZZLE

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

The massage nozzle is an optional product for the 65 mm diameter RES electrode, which adds a mechanical effect to electrical and thermal effects. Due to this, the impulses penetrate more deeply during the procedure.

COMPATIBLE ELECTRODE

RES electrode with a diameter of 65 mm

OBJECTIVE OF THE PROCEDURE

- Improved drainage
- Reduced body fat
- Softening fibrous tissue
- Deeper massage without pain

APPLY FOR PROTOCOLS

- Before surgery (body and limbs)
- After surgery (post liposuction, part 2, prevention and fibrous tissue)
- Skin tightening procedures (ABDOMEN and limbs)
- Treatment of CELLULITE
- Anti-aging procedure for the back

APPLICATION DATA

Circular movements with an emphasis on areas of accumulation of fatty deposits and on fibrous tissues.

OTHER COMMENTS

Should be used after capacitive mode to prepare the fabric.


CLEANING

- Rinse with soapy water.
- Dry well



Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020 . DOY FE
Sección 2ª

MASSAGE NOZZLE

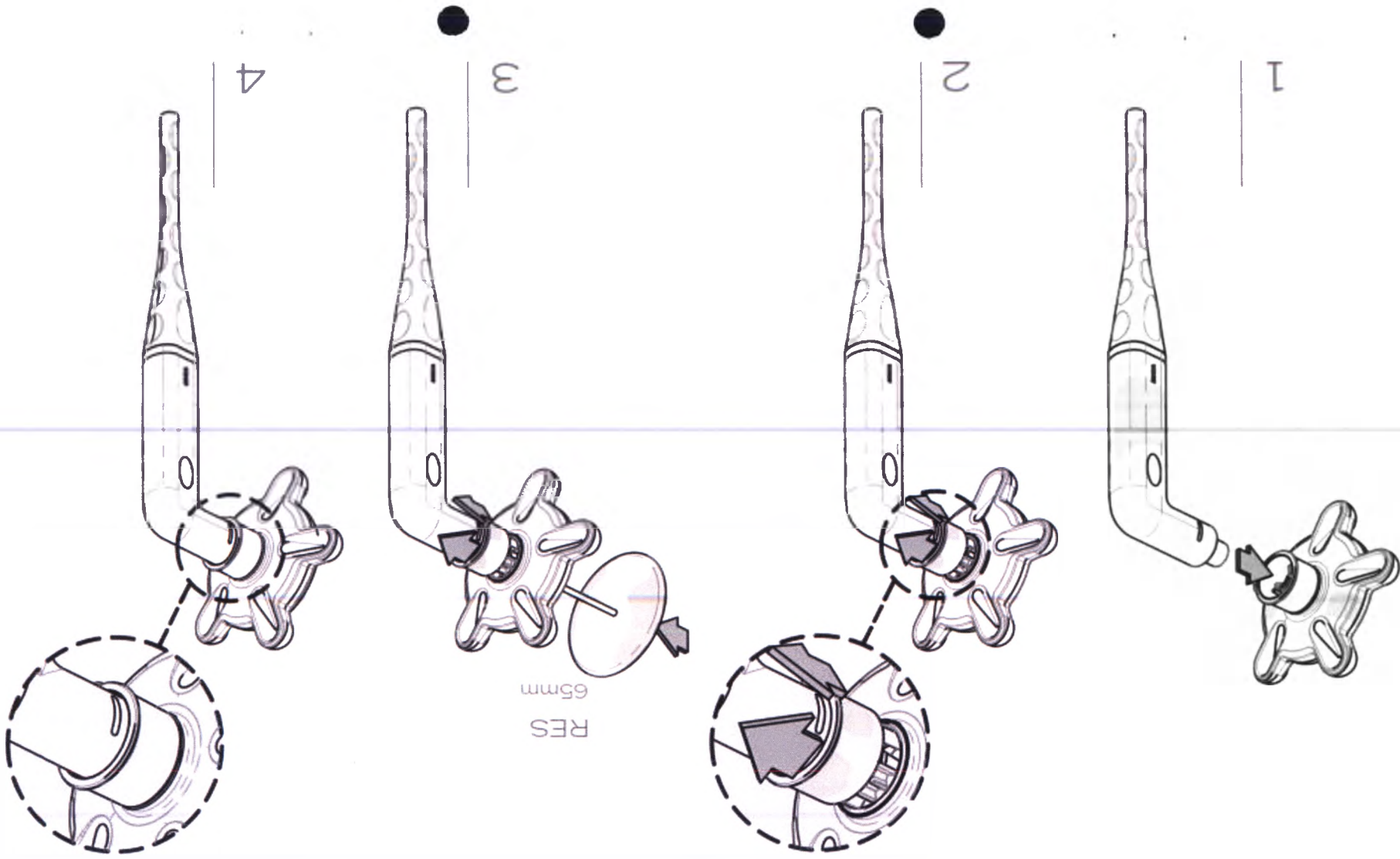

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

BACK

ANTI-AGING PROCEDURE (45 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Процедура повторного определения контуров, способствующая потере жира и дренажу.

POSITION

Lying on the abdomen. Return flat electrode on the abdomen area

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 24 min IAS* 8

RES 16 min IAS* 8

RES 5 min IAS* 8 на позвоночник

APPLICATION DATA

Linear, circular movements and drainage lines

SESSIONS


Two times a week

Total: 12 sessions

NOTES

It is recommended to do exercises for posture and muscle strengthening.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

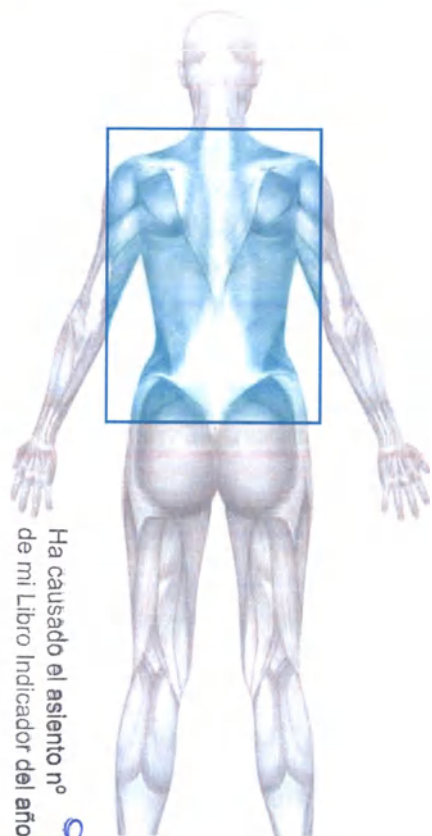

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2010

Sección 2ª
DOY FE

BACK ANTI-AGING PROCEDURE

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

USED PRODUCTS

Conductive Cream Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

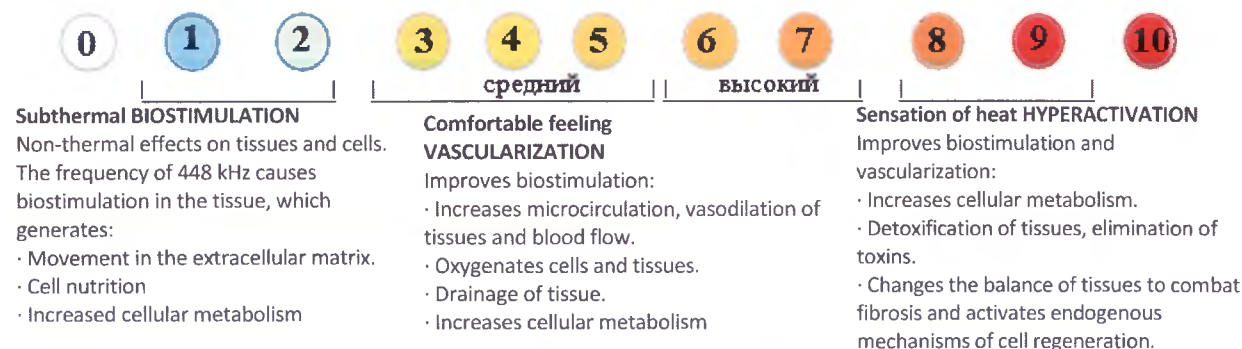

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A. All violations will be prosecuted by law.

PREVENTION OF DEEP VEIN THROMBOSIS (40 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Improvement of venous circulation, microcirculation, pain and drainage control.



POSITION

Lying on the back, return flat electrode on the lumbosacral region

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 7 min IAS * 5 (lying on your back and ABDOMEN)

EACH LEG

RES 2.5 min IAS * 5 (lying on the back ABDOMEN, fixed on the sole)

RES 1 min IAS * 3 (fixed on the sole of the foot)

APPLICATION DATA

Circular and linear movements in the cranial direction

SESSIONS

Two times a week

Total: **12 sessions**

NOTES

It is recommended to use cosmetics for vascular diseases. Especially indicated for people with standing work

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOYF

PREVENTION OF DEEP VEIN THROMBOSIS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

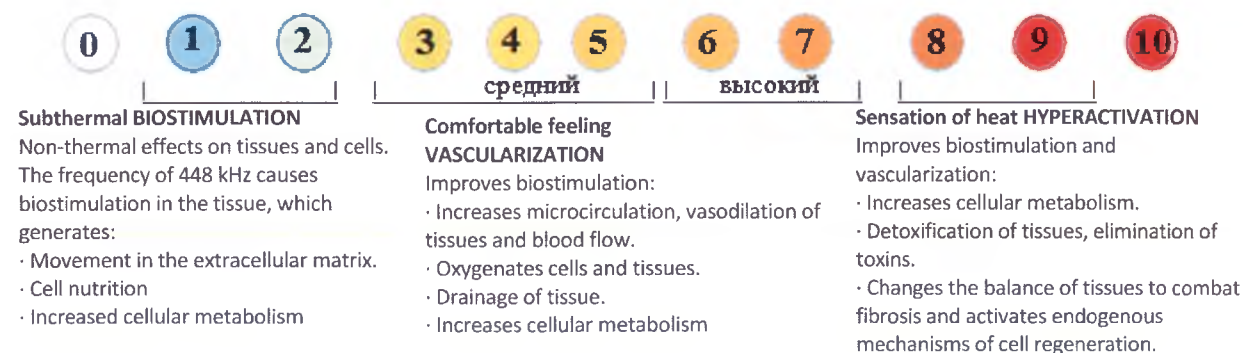

TREATMENT OF STRETCHES (30 min)

Improving vascularization, pain control and drainage.



POSITION

The return flat electrode in the interscapular or lumbar region in the supine position (depending on the area of impact)

CAP 15 min IAS* 7

RES 15 min IAS* 7

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

APPLICATION DATA

Local application in the area requiring treatment

SESSIONS

Once a week

Total: 4 sessions

NOTES

Repeat the procedure after a month and a half using the following steps:

CAP 7 min

RES 23 min

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª
DOY EF.

2020

TREATMENT OF STRETCHES

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to carry out this procedure after targeted therapy or as concomitant therapy to improve the end result. Effectively combined with exercise and an appropriate diet.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.


CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

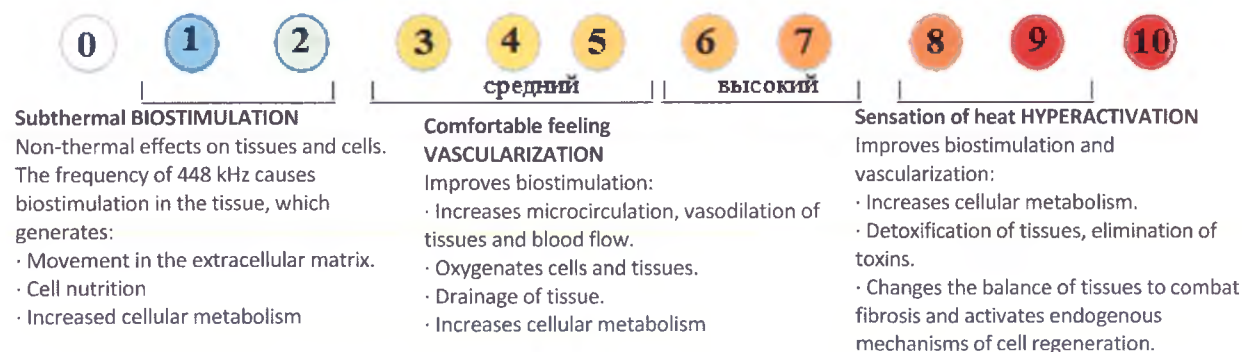

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be pursued by law.

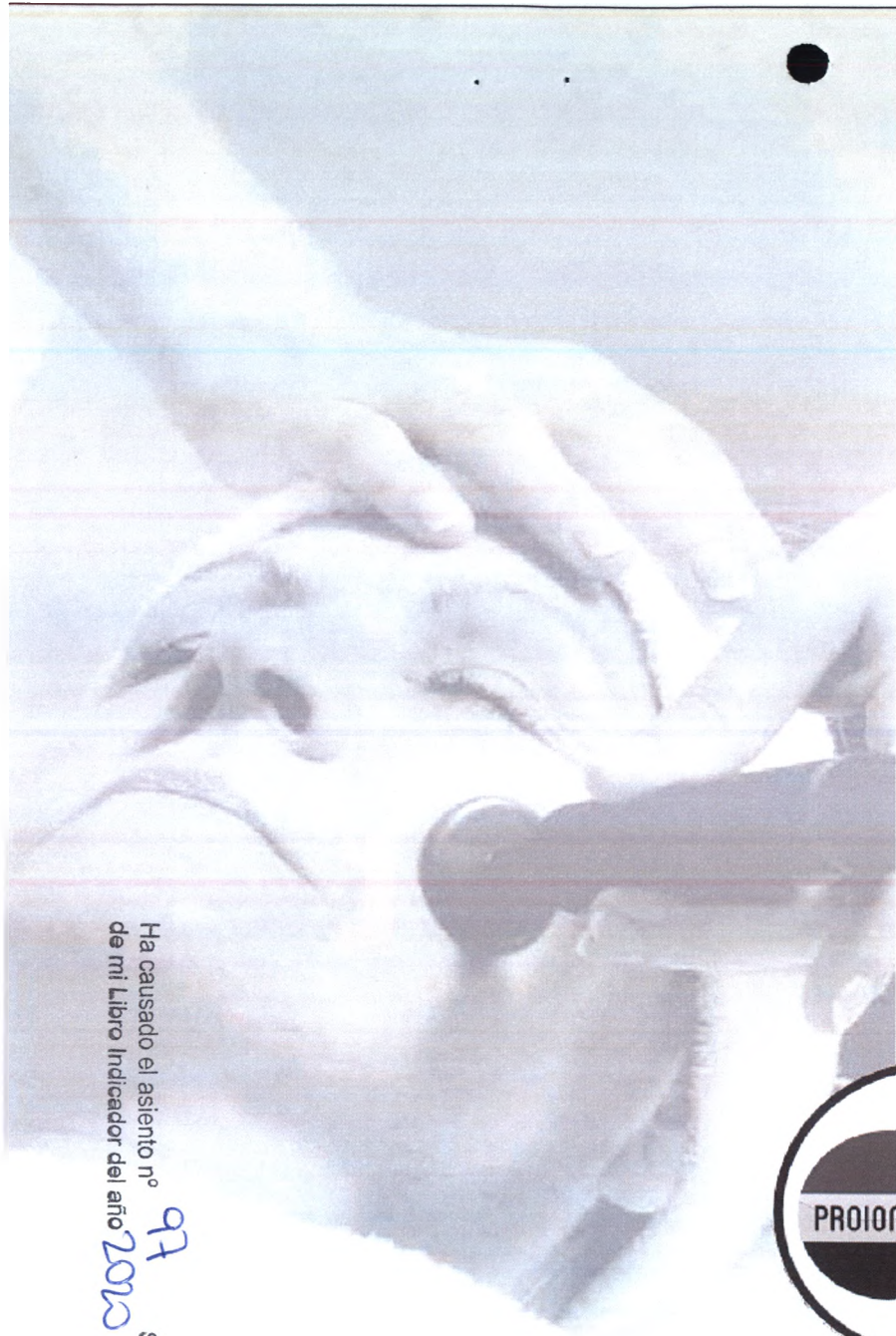

Ha causado el asiento n° 97
de mi Libro Indicador del año 2010 . DOY FE.
Oscar



COMBINED PROTOCOLS

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

COMBINED PROTOCOLS

BEFORE THE FILING PROCEDURE PDO (polydioxanone), PCL (polycaprolactone), and PLL (polylactic) (FACE AND NECK 30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Preparation of tissue for treatment, increased blood flow and oxygenation, contributing to a higher therapeutic effect due to increased cellular metabolism when installing an implant from threads. In addition, the doctor will feel less resistance during the placement of threads, and the risk of hematomas will decrease



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 20 - 30 min IAS* 6 - 8

APPLICATION DATA

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm

Move along the drainage line and towards the musculature

SESSIONS

3 sessions. 30 - 15 and 1 day before implantation of threads

Total: 3 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

30 days before implantation of the threads

NOTES

The procedure can be carried out once or as an adjunct therapy to any other treatment determined by the doctor, for example, light-emitting diodes (LEDs)

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

1 Optionally, use a cylindrical return electrode

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª.
DOY EF

BEFORE THE FILING PROCEDURE PDO (polydioxanone), PCL (polycaprolactone), and PLL (polylactic)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

The installation of threads is recommended to be carried out 24 hours after the procedure in order to eliminate the thermal effect.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

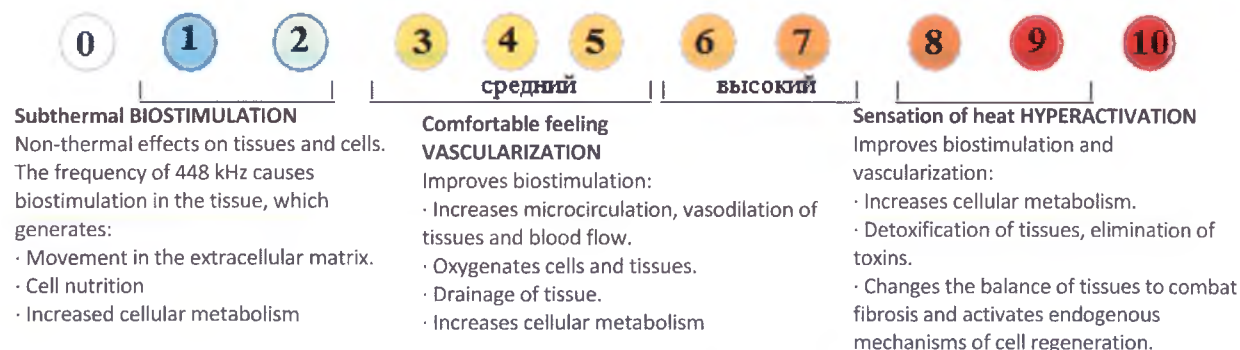

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

AFTER THE FILING PROCEDURE PDO (polydioxanone), PCL (polycaprolactone) and PLL (polylactic) (FACE AND NECK 20-30 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Strengthening neocollagenesis caused by the placement of the thread itself, and contributing to the formation of physiological reactions. Improving the results.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min **IAS*** 6 – 8

RES 10-20 min **IAS*** 6 – 8

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, **RES** 35 mm

APPLICATION DATA

Move along the drainage line and towards the musculature

SESSIONS

Once a week

Total: 4-6 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

30-45 дней после размещения нитей

NOTES

If necessary, a subthermal procedure (IAS 1 with signal modulation) can be performed immediately after placement of the threads to limit the side effects of the operation at the subcutaneous level, but without reducing the effectiveness of the treatment. This protocol will consist of 1 to 3 sessions with an interval of 24 hours between sessions in accordance with the needs of the patient.

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020
Sección 21
DOXA

BEFORE THE FILING PROCEDURE PDO (polydioxanone), PCL (polycaprolactone), and PLL (polylactic)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

Рекомендуется подождать 30 - 45 дней после размещения нитей.

Для достижения долгосрочного терапевтического эффекта рекомендуется назначать один курс лечения каждые 2 или 3 месяца.

Проверьте отсутствие в прошлом гиперчувствительности к ингредиентам крема электропроводящего Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

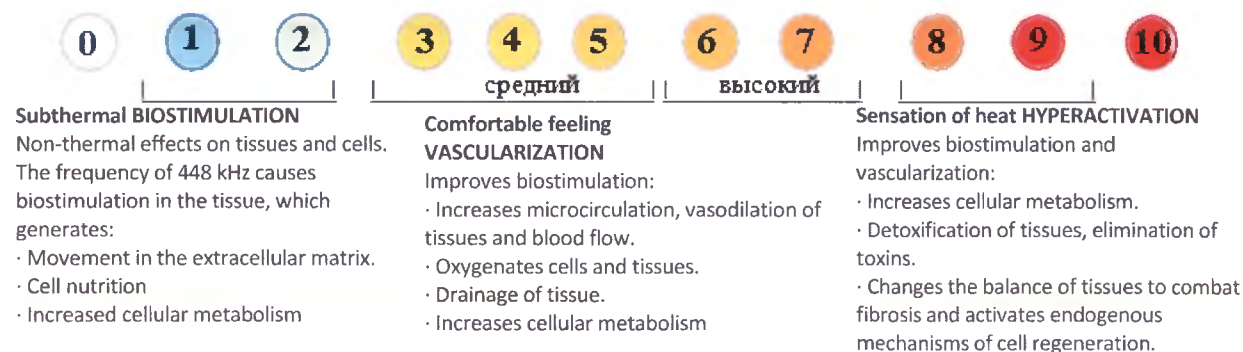

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

BEFORE INTRODUCING HYALURONIC ACID

(FACE 15 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Immediate densification of the tissue, improved non-dispersion of the product caused by sagging skin of the patient, and, consequently, an increase in the volume of the treated area with a smaller amount of product.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 6 – 8

RES 5 min IAS* 6 – 8

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

The procedure is carried out throughout the face, focusing on the areas where it is planned to introduce hyaluronic acid

SESSIONS

Two or three times a week

Total: 2 or 4 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

1-2 weeks before administration

NOTES

If necessary, chemical peeling can be performed as an additional treatment 24/48 hours before the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод
Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clínica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2012

97

Sección 2ª
DOY FE

[Signature]

BEFORE INTRODUCING HYALURONIC ACID

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FRIGONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

Drink at least 1.5 liters of water per day while maintaining a healthy lifestyle.

Consider a possible decrease in the therapeutic effectiveness of this procedure in patients with collagen diseases or patients taking high doses of corticosteroids.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

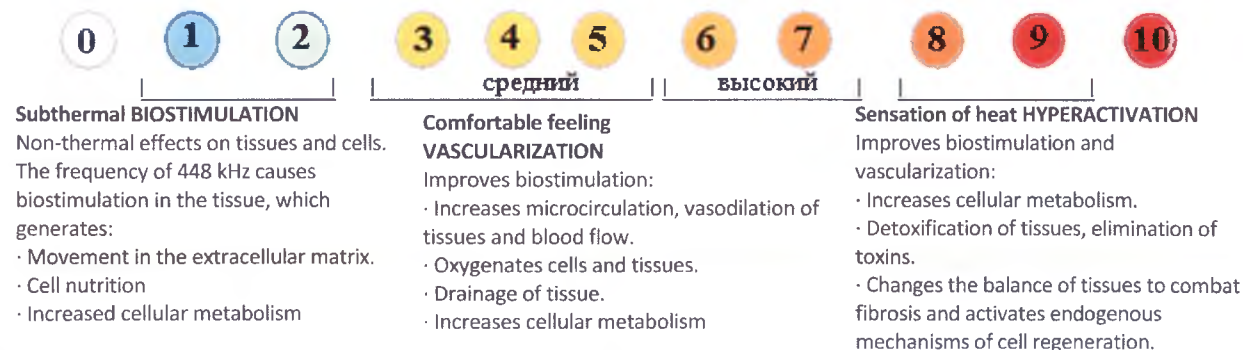

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

AFTER INTRODUCTION OF HYALURONIC ACID (FACE 15 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Strengthening the biological effects of hyaluronic acid on the treated tissue (neocollagenesis, neoVASCULARIZATION, etc.). In addition, it is also possible to reduce the side effects of treatment (bruises, immobilization, edema ...).



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 3 – 5

RES 5 min IAS* 3 – 5

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

One-Two times a week

Total: 2 or 4 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

15 days after administration

NOTES

In case of bruising, it is recommended to immediately begin treatment, leaving at least 8 hours between sessions, depending on the needs of the patient. Perform circular motions on bruises with the help of ELECTRODE-CAP 5 - 7 minutes with IAS 1 - 2 with signal modulation.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2002. DOY FE

Sección 2ª

[Handwritten signature]

AFTER INTRODUCTION OF HYALURONIC ACID

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

15 days after the end of mesotherapy, you can carry out the procedure as an adjuvant (IAS 3 - 5) against aging.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

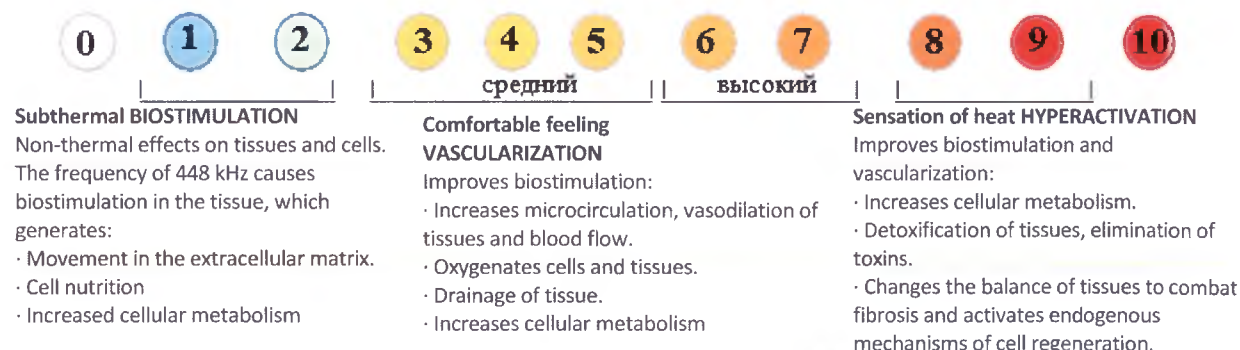


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

BEFORE THE INTRODUCTION OF CALCIUM HYDROXYAPATITE, POLYCAPROLACTON OR POLYLACTIC ACID (FACE 20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Ensuring optimal tissue condition before infiltration, as a result of immediate tissue densification and increased cellular metabolism.

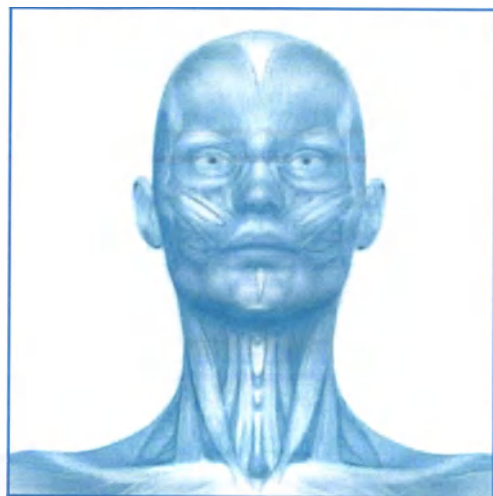

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 15 min IAS* 6 – 8

RES 5 min IAS* 6 – 8

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

The procedure is carried out throughout the face, focusing on the areas in which it is planned to introduce these substances

SESSIONS

Two times a week

Total: 4 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

15 days before administration

NOTES

The procedure can be carried out once or as an adjunct therapy to any other treatment determined by the doctor, for example, light-emitting diodes (LEDs)

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020.

97

Sección 2ª,
DOY FE.

000 ЦПММ

BEFORE THE INTRODUCTION OF CALCIUM HYDROXYAPATITE, POLYCAPROLACTON OR POLYLACTIC ACID

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

The introduction of fillers or other specified substances is recommended 24 hours after the procedure to eliminate the thermal effect.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

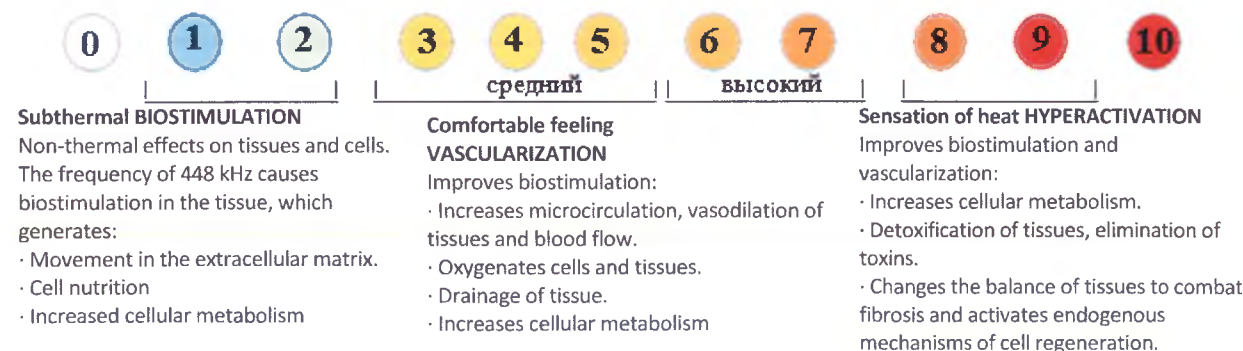


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

AFTER INTRODUCTION OF CALCIUM HYDROXYAPATITE, POLYCAPROLACTON OR POLYLACTIC ACID (FACE 20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

Усиление неоколлагенеза, вызванного размещением филлеров и усиление генерации физиологических реакций. Улучшение результатов.

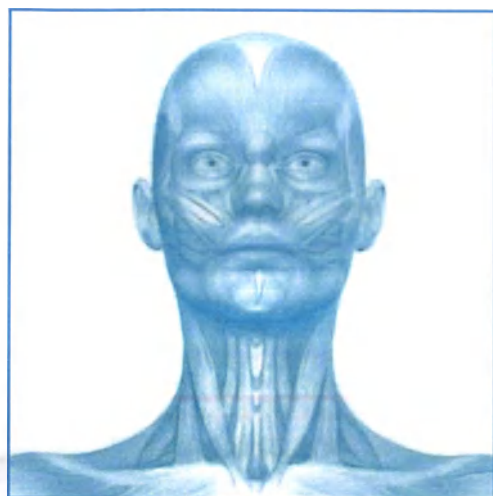

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 6 – 8

RES 10 min IAS* 6 – 8

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

Once a week

Total: 4 to 6 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

15-30 days after administration

NOTES

If necessary, a subthermal procedure (IAS 1 with signal modulation) can be performed immediately after the introduction of fillers to limit side effects from the introduction, without reducing the effectiveness of the procedure. This protocol will consist of 1 to 3 sessions with an interval of 24 hours between sessions in accordance with the needs of the patient.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

BEFORE THE INTRODUCTION OF CALCIUM HYDROXYAPATITE, POLYCAPROLACTON OR POLYLACTIC ACID

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

It is recommended to wait 30 days after the introduction of fillers to begin the procedure.

To achieve a long-term therapeutic effect, it is recommended to prescribe one course of treatment every 1 or 2 months.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

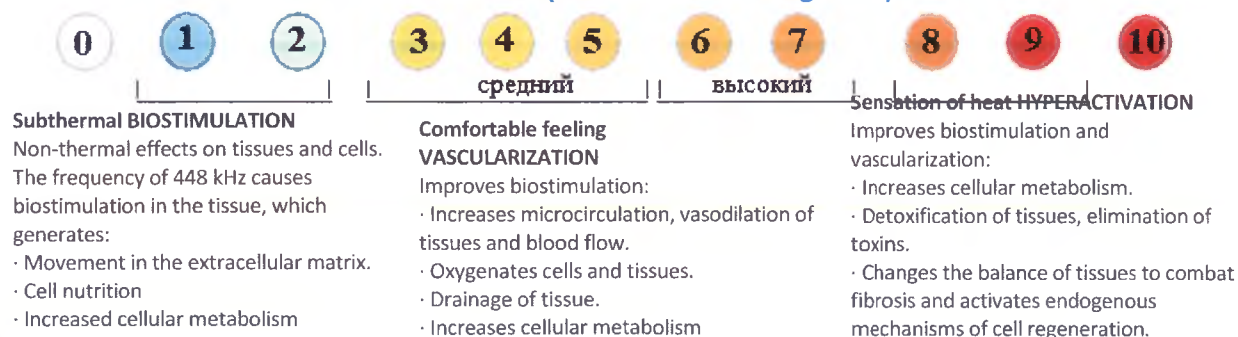


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., issued in written form. All violations will be prosecuted by law.

BEFORE MESOTHERAPY WITH VITAMINS, PEPTIDES, NON-RETICULAR HYALURONIC ACID, PLASMOTHERAPY

FACE AND NECK(20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Ensuring the optimal state of tissue before the procedure, strengthening the appropriate intradermal distribution and assimilation of the infiltrated products due to the increased permeability of the cell membrane caused by the procedure. Therefore, the risk of hematomas due to infiltration will be reduced.

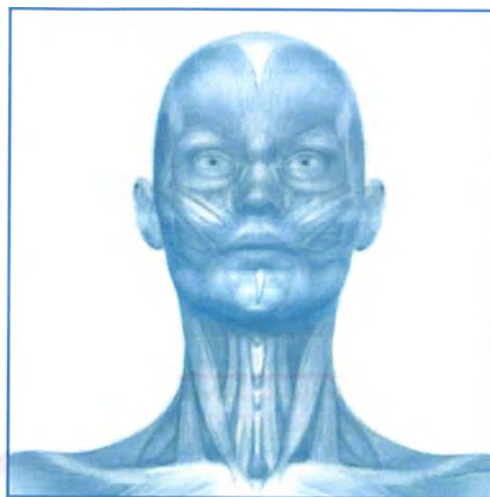

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 6 – 8

RES 10 min IAS* 6 – 8

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

Introduction 8 hours after the procedure to avoid the resulting thermal effect

SESSIONS

2-3 once a week

Total:2-4 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

1-2 weeks before administration

NOTES

If necessary, chemical peeling can be performed as an additional treatment 24/48 hours before the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97 Sección 2ª,
2020 . DOY FEA

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Крем электропроводящий Face Cream

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result.

For external use only.


- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

Maintain a healthy lifestyle.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

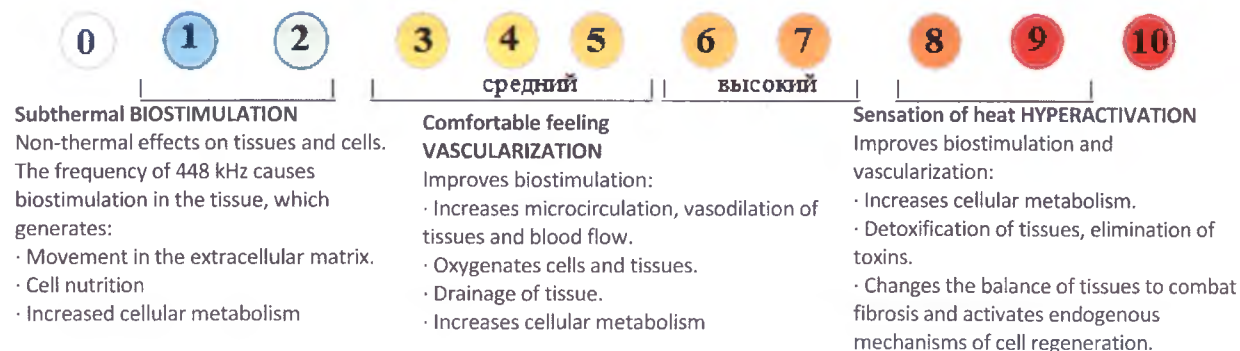


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole/тично воспроизводить, изменять, распространять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., вышшенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

AFTER MESOTHERAPY BY VITAMINS, PEPTIDES, NERETICULAR HYALURONIC ACID, PLASMOTHERAPY FACE AND NECK(20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Strengthening the biological effects of mesotherapy on the treated tissue (neocollagenesis, neoVASCULARIZATION, etc.) In addition, it is also possible to reduce the side effects of treatment (bruises, umoborizatsiya, edema ...).

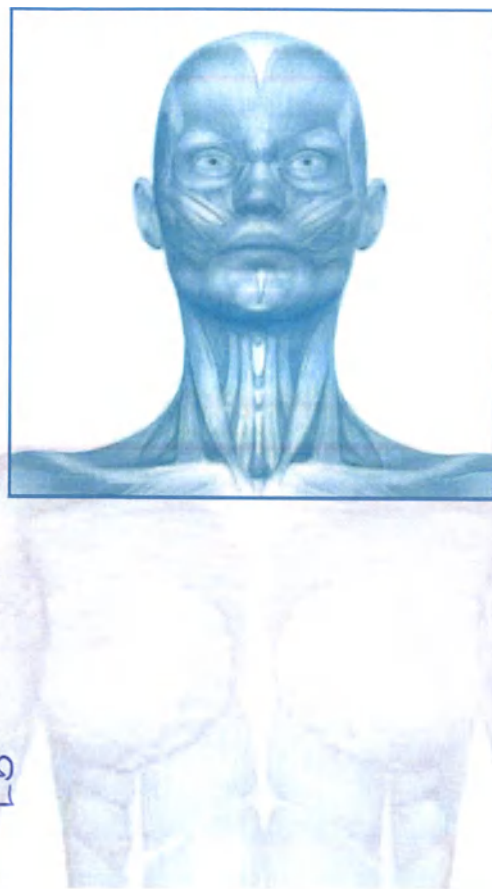

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 3 – 5

RES 10 min IAS* 3 – 5

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

1-2 once a week

Total:2-4 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

15-30 days after administration

NOTES


In case of bruising, it is recommended to immediately stop the procedure, leaving at least 8 hours between sessions, depending on the needs of the patient. Perform circular motions in the area of bruises in CAP mode 5 - 7 min with IAS 1 - 2 with signal modulation.

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020

Sección 2ª
DOY FE

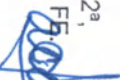

AFTER THE INTRODUCTION OF BOTULINOTOXIN FOR REMOVING MIMIC WRINKLES FACE (20 min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

An additional procedure to improve the condition of tissues. Promotes dermoepidermal regeneration after muscle relaxation, caused by the therapeutic effect of botulinum toxin with facial wrinkles. Improving the results.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 6 – 8

RES 10 min IAS* 6 – 8

ELECTRODE CAP: 30 - 40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

Performing movements along the drainage line and towards the muscles

SESSIONS

1 once a week

Total: 4-6 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

15 days after administration

NOTES

If necessary, chemical poring can be done 24-48 hours before the procedure.

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

--- Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2012. DOY FE

Sección 2ª

AFTER THE INTRODUCTION OF BOTULINOTOXIN FOR REMOVING MIMIC WRINKLES

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

Lead a healthy lifestyle.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

- 1. Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
- 2. Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
- 3. Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
- 4. Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
- 5. Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

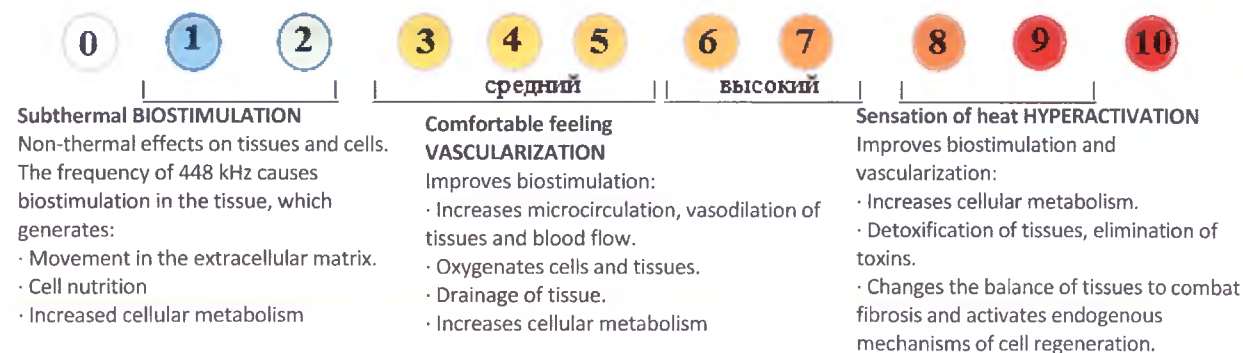

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A.. Any infringement will be prosecuted by law.

FOLLOWING TREATMENT OF SIDE EFFECTS CAUSED BY A NON-ABLATION FRACTION LASER AND FRACTIONAL ABLATION RADIO FREQUENCY

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

FACE (20 min)

Control of the inflammatory and edematous process, without reducing its beneficial effects, accelerating the patient's recovery, improving results and reducing the risk of side effects (post-inflammatory hyperpigmentation ...).



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 20 min IAS* 1 с модуляцией сигнала

ELECTRODE RES 35 mm

APPLICATION DATA

Performing linear movements without shifting the tissue under a sterile hydrogel dressing and applying an electrically conductive cream under the electrode to slip

SESSIONS

1 once a week

Total: 4-6 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

15 days after administration

NOTES

If necessary, chemical poring can be done 24-48 hours before the procedure.

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.

97

Sección 2ª

[Signature]

FOLLOWING TREATMENT OF SIDE EFFECTS CAUSED BY A NON-ABLATION FRACTION LASER AND FRACTIONAL ABLATION RADIO FREQUENCY

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

After 1 month after treatment, INDIBA procedures can be used as an adjuvant (IAS 3-5) against aging.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure. оцедурь.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

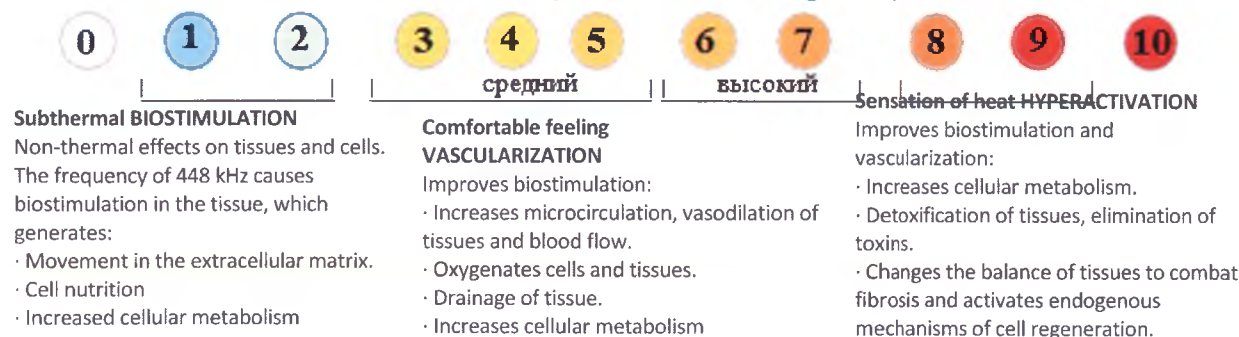

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A.. Все нарушения будут преследоваться по закону.

NEXT TREATMENT OF SIDE EFFECTS CAUSED BY IFL AND A VASCULAR LASER (PDL, KTP, Nd: YAG, etc.)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

FACE (20 min)

Control of the inflammatory and edematous process, without reducing its beneficial effects, accelerating the patient's recovery, improving results and reducing the risk of side effects (post-inflammatory hyperpigmentation ...).



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 20 min IAS* 1 с модуляцией сигнала

RES 10 min IAS* 1 с модуляцией сигнала

ELECTRODE CAP 30-40 mm, RES 35 mm

APPLICATION DATA

Perform linear or circular motions without slipping over fabric

SESSIONS

2-3 once a week

Total: 1-3 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

24 hours after exposure

NOTES

Immediate treatment after laser exposure is recommended, leaving at least 8 hours between sessions according to patient needs

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. Sección 2ª.
DOY FE
[Signature]

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

NEXT TREATMENT OF SIDE EFFECTS CAUSED BY IFL AND A VASCULAR LASER (PDL, KTP, Nd: YAG, etc.)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

RECOMMENDATIONS


After 1 month after treatment, INDIBA procedures can be used as an adjuvant (IAS 3-5) against aging.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

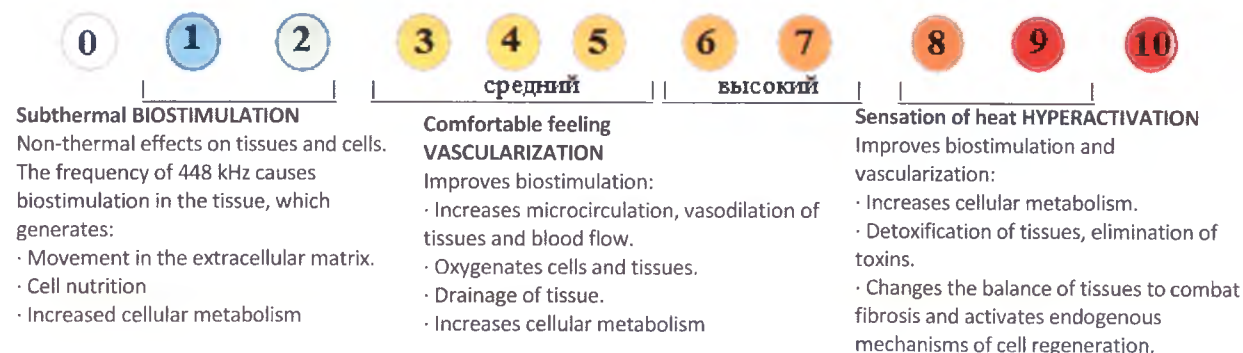

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part, to copy, to disseminate or to use it for any other purpose without the prior written consent of INDIBA, S.A. All violations will be pursued by law.

BEFORE MESOTHERAPY AND LASER PROCEDURE (DEPIGMENTATION, NON-ABLATION ETC.) IN THE INFRAORBITAL AREA (SACKS UNDER EYES)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

INFRAORBITAL AREA (10 min)

Facilitate drainage of the area to be infiltrated to avoid bruising and swelling of the eyelids.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 10 min IAS* 4-6 с модуляцией сигнала

ELECTRODE CAP 30 mm

APPLICATION DATA

Local impact

SESSIONS

1-2 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

24-48 hours after exposure

NOTES

If necessary, a subthermal follow-up procedure (IAS 1 with signal modulation) can be performed immediately after treatment if a hematoma occurs.



¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY FE

[Signature]

BEFORE MESOTHERAPY AND LASER PROCEDURE (DEPIGMENTATION, NON-ABLATION ETC.) IN THE INFRAORBITAL AREA (SACKS UNDER EYES)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream

RECOMMENDATIONS

Drink at least 1.5 liters of water per day while maintaining a healthy lifestyle.

Consider the possible decrease in the effectiveness of the procedure in patients with collagen diseases or in patients taking high doses of corticosteroids.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

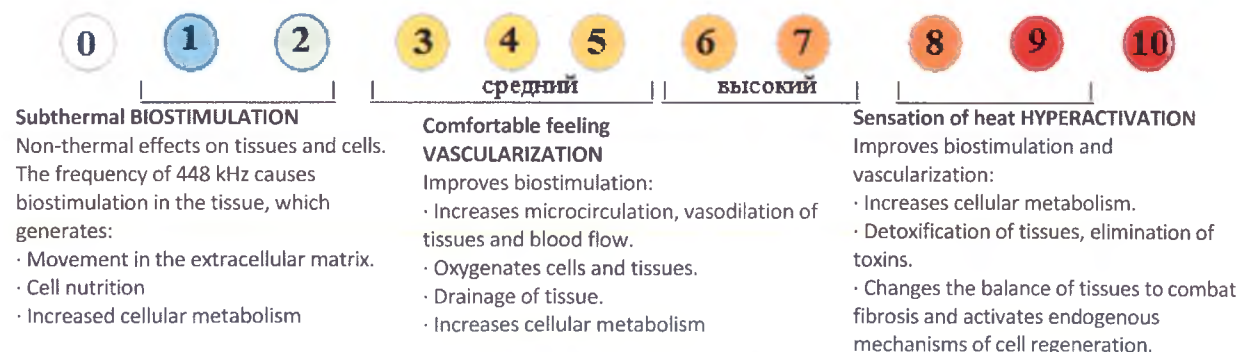


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A.. Все нарушения будут преследоваться по закону.

BEFORE CAPILLARY SEALING USING VARIOUS TECHNOLOGIES (MESOTHERAPY, CARBOXYTHERAPY, TOP, PHOTO REJUVENATION ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Fronto-dark and occipital region (15 min.)

Immediate tissue compaction, eliminating product non-dispersion.

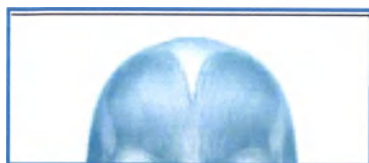

POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 15 min IAS* 6-8

APPLICATION DATA

Область лобной и теменной кости с акцентом на области проведения процедуры. Выполнять линейные движения

SESSIONS

2-3 once a week
Total: 2-4 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

1-2 weeks before exposure

NOTES

If necessary, chemical poring can be done 24-48 hours before the procedure.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
DOY EE

2020

BEFORE CAPILLARY SEALING USING VARIOUS TECHNOLOGIES (MESOTHERAPY, CARBOXYTHERAPY, TOP, PHOTO REJUVENATION ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream
/Лосьон для волос INDIBA (не входит в комплект поставки)

RECOMMENDATIONS

Drink at least 1.5 liters of water per day while maintaining a healthy lifestyle.

Consider the possible decrease in the effectiveness of the procedure in patients with collagen diseases or in patients taking high doses of corticosteroids.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients Face Cream.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

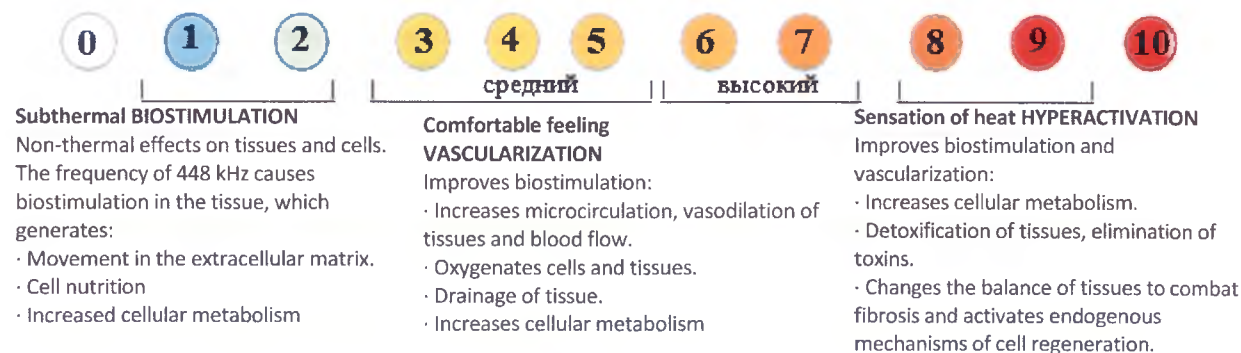

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A.. Выпущено в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

AFTER CAPILLARY SEALING USING VARIOUS TECHNOLOGIES (MESOTHERAPY, CARBOXYTHERAPY, TOP, PHOTO REJUVENATION ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Fronto-dark and occipital region (15 min.)

Control of inflammatory and edematous processes, without reducing beneficial effects.



POSITION

Lying on your back. Return flat electrode on the interscapular region (ensure good contact with the tissue)

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 15 min IAS* 1 с модуляцией сигнала

APPLICATION DATA

Perform linear movements

SESSIONS

1-3 once a week
Total: 1-3 sessions

BEGINNING OF THE PROCEDURE

72 hours after exposure

NOTES

It is recommended to start the protocol 72 hours after treatment, leaving at least 8 hours between sessions according to the needs of the patient

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

¹При желании можно использовать цилиндрический возвратный электрод

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Пабло Наранхо, Clinica Laser Elite, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE.

Sección 2ª

AFTER CAPILLARY SEALING USING VARIOUS TECHNOLOGIES (MESOTHERAPY, CARBOXYTHERAPY, TOP, PHOTO REJUVENATION ...)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Face Cream
/Лосьон для волос INDIBA (не входит в комплект поставки)

RECOMMENDATIONS

After 1 month after treatment, INDIBA procedures can be used as an adjuvant (IAS 3-5) against aging.

Check for past hypersensitivity to face cream ingredients.

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Температура:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Гигиена:** To optimize the transfer of energy to the patient when using the product, it is recommended that the user hold onto the electrode handle during the procedure. If it is necessary to use manual therapy methods, INDIBA representatives recommend the use of gloves (not included). This undoubtedly optimizes the transfer of energy to the patient and ensures the best result of the procedure.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

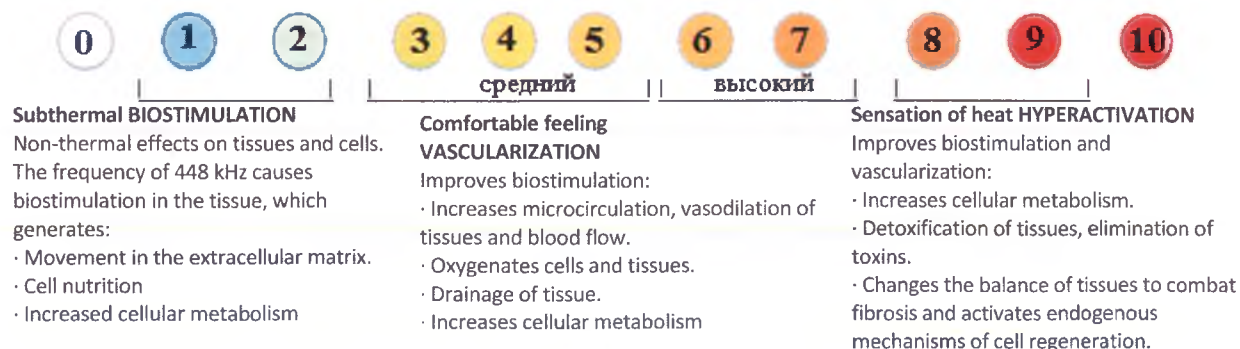


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A., expressed in writing. All violations will be pursued by law.

AESTHETIC GYNECOLOGY

INDIBA

DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

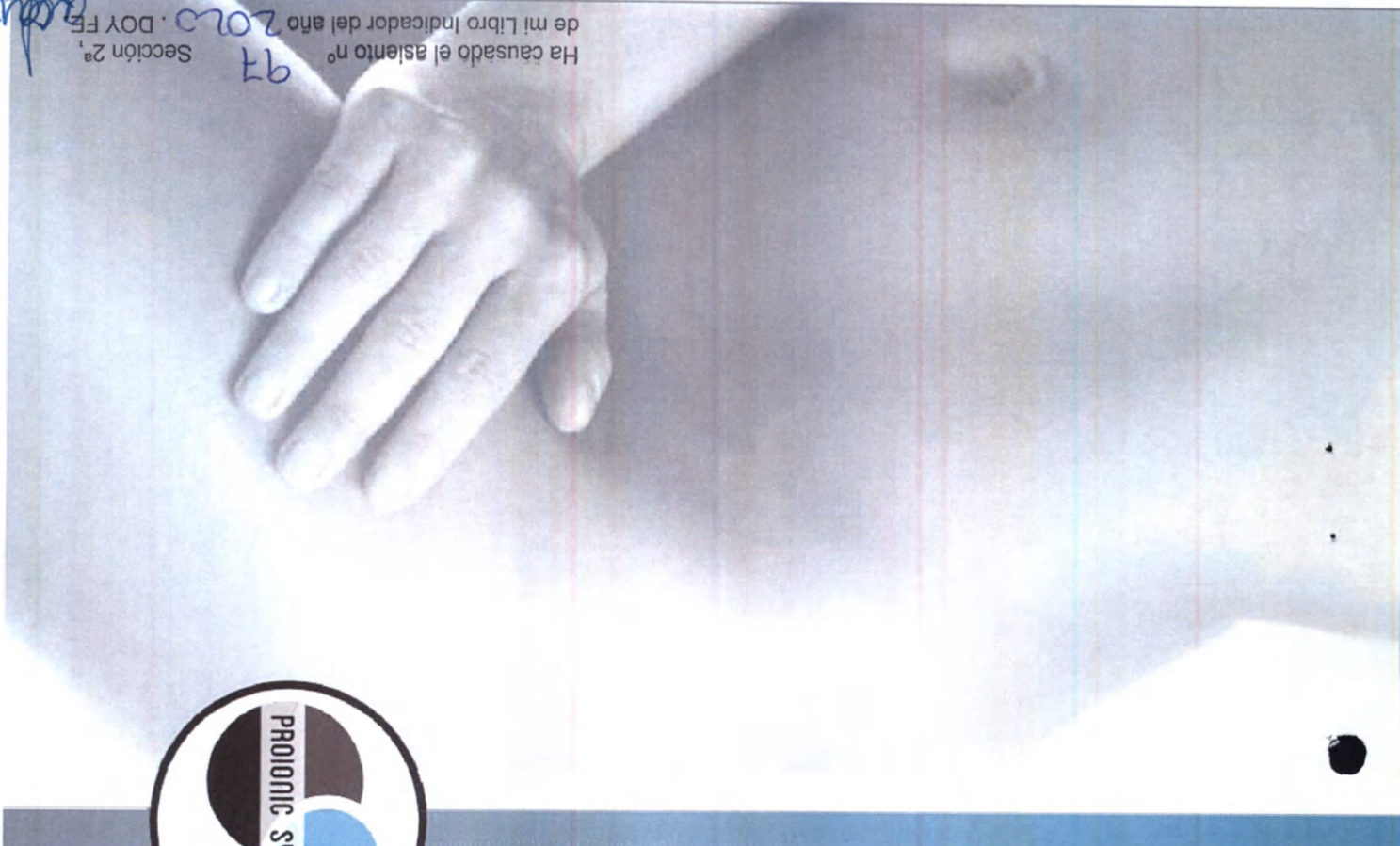

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año
Sección 2ª, DOY FE
2010
97

TRN0239 V2 2018.06.26 EN

GENITAL REJUVENATION (20 min.)

Strengthening, enhancing hydration, closing the vagina, tightening collagen

POSITION

Lithotomy position. Reversible flat electrode on the lumbosacral

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 30-40 mm: 5 min IAS* 8 from each side

RES 35 mm: 5 min IAS* 8 from each side

APPLICATION DATA

Perform circular or linear movements depending on the patient's anatomy.

First process one half of the vaginal opening and then the other. The temperature should be around 40 - 42 ° C.

SESSIONS

1 time per month

Total: 3 sessions

NOTES

ELECTRODE RES, ELECTRODE RES Longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 min, and then rinse with water.

ELECTRODE CAP, ELECTRODE CAP longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water.

Disinfect the handles for ELECTRODES and returnable ELECTRODES using the products used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica BMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97 Sección 2ª,
DOY FE

GENITAL REJUVENATION

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

We recommend this procedure after more targeted therapy or as a concomitant treatment to improve the end result. Treatment should be accompanied by exercise and a healthy diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants


COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Temperature:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Hygiene:** INDIBA representatives recommend the use of nitrile or latex disposable gloves (not supplied).

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

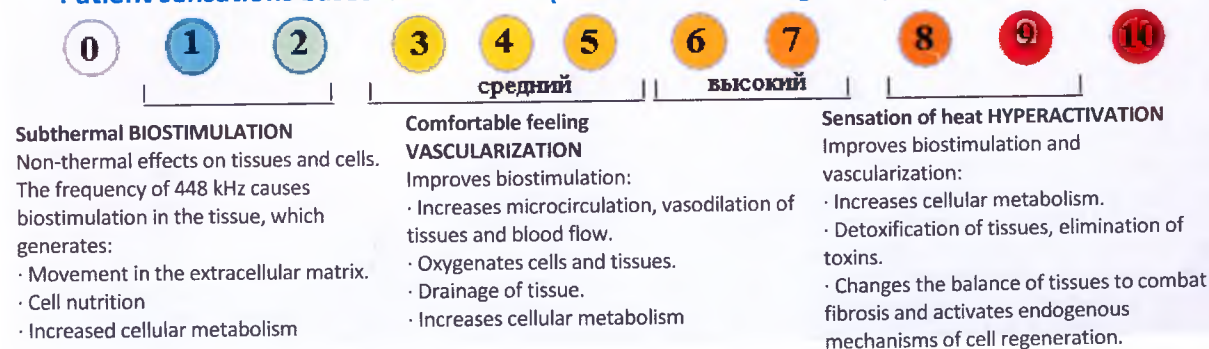

which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A.. Выпускено в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

BEFORE GENITAL SURGERY (20 min)

Preparation of tissue before surgery, increased blood supply and oxygenation.



POSITION

Lithotomy position. Reversible flat electrode on the lumbosacral

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 30-40 mm: 5 min IAS* 6-7 from each side

RES 35 mm: 5 min IAS* 6-7 from each side

APPLICATION DATA

Perform circular or linear movements depending on the patient's anatomy.

First process one half of the vaginal opening and then the other.

SESSIONS

Total: 1 or 2 sessions

The last session should be performed 24-48 hours before surgery.

NOTES

ELECTRODE RES, ELECTRODE RES Longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 min, and then rinse with water.

ELECTRODE CAP, ELECTRODE CAP longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water.

Disinfect the handles for ELECTRODES and returnable ELECTRODES using the products used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica VMUM, г. Мадрид, Испания

BEFORE GENITAL SURGERY

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

We recommend this procedure after more targeted therapy or as a concomitant treatment to improve the end result. Treatment should be accompanied by exercise and a healthy diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants


COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Temperature:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Hygiene:** INDIBA representatives recommend the use of nitrile or latex disposable gloves (not supplied).

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

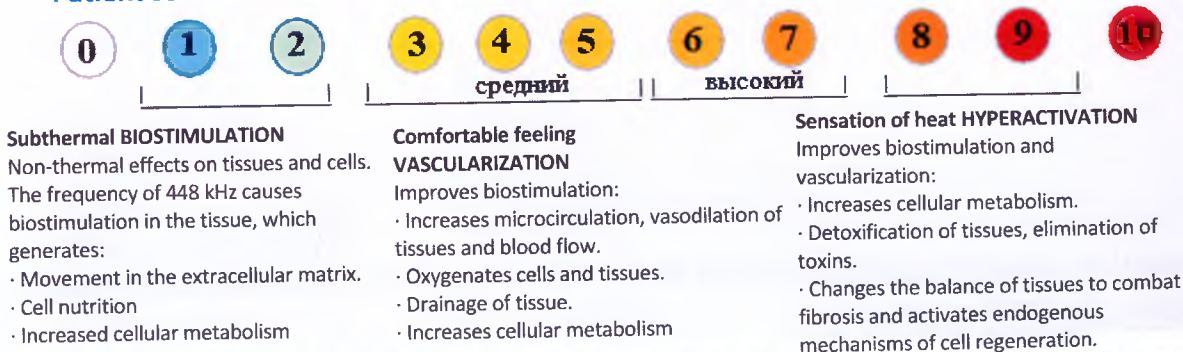

which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

AFTER LABIOPLASTY ACUTE 1 PHASE (20min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FREQUENT SYSTEM

Accelerate wound healing, prevent adhesions and fibrosis, strengthen tissues and improve hydration.



POSITION

Lithotomy position. Reversible flat electrode on the lumbosacral

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 30-40 mm: 4 min IAS* 5 from each side

RES 35 mm: 4 min IAS* 5 from each side

CAP 40 mm: 2 min IAS* 1 from each side

APPLICATION DATA

Perform circular or linear movements depending on the patient's anatomy. Perform the procedure only after the inflammatory process disappears. This protocol can be continued with the genital rejuvenation protocol. If necessary, you can combine this protocol with others.

SESSIONS

Once a week

Total: 4 sessions

NOTES

ELECTRODE RES, ELECTRODE RES Longitudinal: for individual use only.

Clean ELECTRODE twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 min, and then rinse with water.

ELECTRODE CAP, ELECTRODE CAP longitudinal: for individual use only.

Clean ELECTRODE twice with soapy water.

Disinfect the handles for ELECTRODES and returnable ELECTRODES using the products used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica VMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº 97
de mi Libro Indicador del año 2020.
Sección 2ª.
DOY FE.
2021

AFTER LABIOPLASTY ACUTE 1 PHASE

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

We recommend this procedure after more targeted therapy or as a concomitant treatment to improve the end result. Treatment should be accompanied by exercise and a healthy diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants


COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Temperature:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Hygiene:** INDIBA representatives recommend the use of nitrile or latex disposable gloves (not included).

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

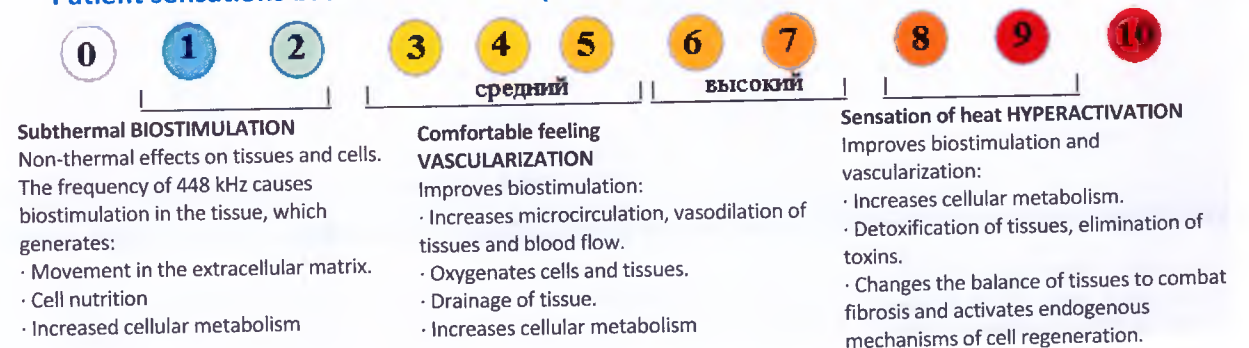


which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part, or to use it for any other purpose without the prior written consent of INDIBA, S.A. Выпускенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

LABIOPLASTY AFTER ACUTE 2 PHASE (20min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Accelerate wound healing, prevent adhesions and fibrosis, strengthen tissues and improve hydration.

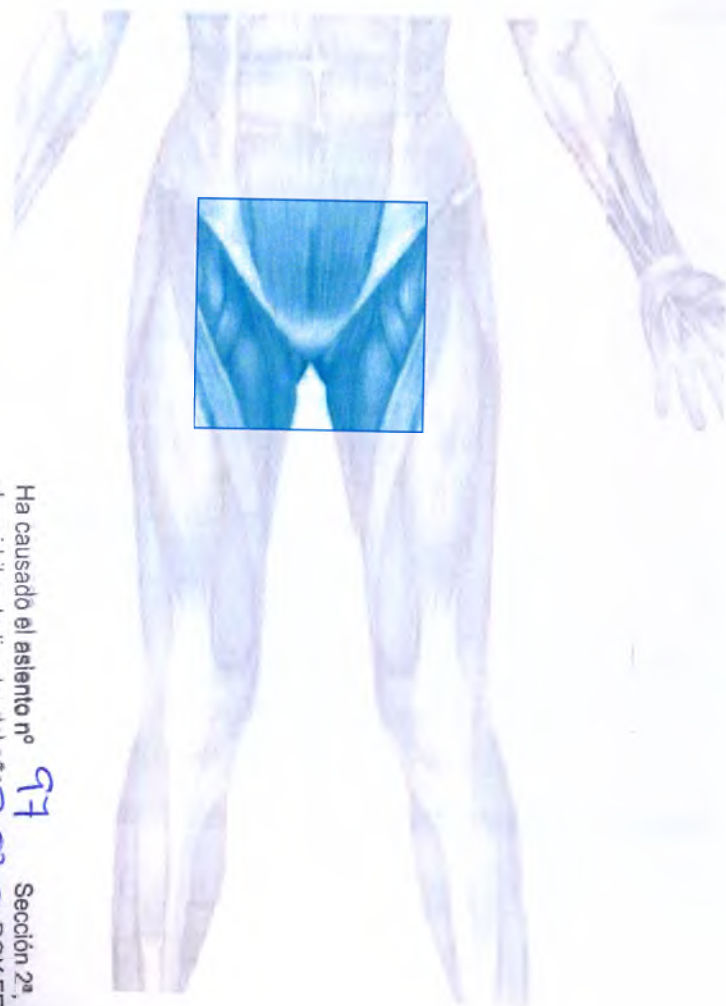

POSITION

Lithotomy position. Reversible flat electrode on the lumbosacral

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

CAP 30-40 mm: 4 min IAS* 5 from each side

RES 35 mm: 4 min IAS* 5 from each side

CAP 40 mm: 2 min IAS* 1 from each side

APPLICATION DATA

Perform circular or linear movements depending on the patient's anatomy. Perform the procedure only after the inflammatory process disappears. This protocol can be continued with the genital rejuvenation protocol. If necessary, you can combine this protocol with others.

SESSIONS

Once a week

Total: 4 sessions

NOTES

ELECTRODE RES, ELECTRODE RES Longitudinal: for individual use only.

Clean ELECTRODE twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 min, and then rinse with water.

ELECTRODE CAP, ELECTRODE CAP longitudinal: for individual use only.

Clean ELECTRODE twice with soapy water.

Disinfect the handles for ELECTRODES and returnable ELECTRODES using the products used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica VMUM, г. Мадрид, Испания

INDIBA
DEEP CARI
MEDICAL FREONIC SYSTEM

Крем электропроводящий Care Cream

We recommend this procedure after more targeted therapy or as a concomitant treatment to improve the end result. Treatment should be accompanied by exercise and a healthy diet.

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result.

For external use only.

1. Position: hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. Pressure: maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. Speed: move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. Temperature: ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. Hygiene: INDIBA representatives recommend the use of nitrile or latex disposable gloves (not supplied).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

средний высокий

Non-thermal effects on tissues and cells.
The frequency of 448 kHz causes biostimulation in the tissue, which generates:

- Movement in the extracellular matrix.
- Cell nutrition
- Increased cellular metabolism

- Increases microcirculation, vasodilation of tissues and blood flow.
- Oxygenates cells and tissues.
- Drainage of tissue.
- Increases cellular metabolism

- Improves biostimulation and vascularization:
- Increases cellular metabolism.
- Detoxification of tissues, elimination of toxins.
- Changes the balance of tissues to combat fibrosis and activates endogenous mechanisms of cell regeneration.

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the prior written consent of INDIBA, S.A.


Этот протокол, который является исключительной собственностью INDIBA, S.A., защищен законом об интеллектуальной собственности и может использоваться только законными владельцами соответствующего оборудования. Поэтому воспроизводить, изменять или передавать его бесплатно, либо без предварительного согласия INDIBA, S.A., выпущенного в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.

Intracavitary genital rejuvenationE

(20min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL FROENIC SYSTEM

Reduced sagging tissues, improved hydration and the elimination of dryness, rejuvenation of epithelial tissue and vaginal mucosa. Decreased vaginal atrophy due to premenstrual syndrome. Improving local estrogen trophism. Increased elasticity and firmness of the vagina. Activation of neocollagenesis. Stimulation of contractility and thickening of the walls of the vagina.

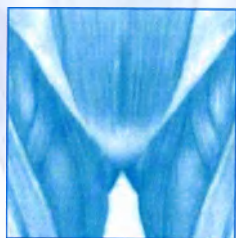

POSITION

Lithotomy position. Reversible flat electrode on the lumbosacral

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

External application: CAP 30-40 mm: 2 min IAS*8 from each side

RES 35 mm: 2 min IAS* 8 from each side

Внутреннее применение: ELECTRODE CAP longitudinal: 12 min IAS* 7

APPLICATION DATA

External use: Perform circular or linear movements depending on the patient's anatomy. Maintain sufficient pressure to ensure perfect contact between the skin and the entire surface of ELECTRODE.

Internal use: Use a 1-minute interval with pressure on the sides of the vagina (upper, right, left, lower): a total of 3 cycles of 4 minutes (1 minute from each side) to complete the procedure. ELECTRODE should be fully in contact with the vaginal wall. Before starting the procedure, ELECTRODE must be completely immersed in the vagina. Be sure to stop the procedure before removing the ELECTRODE.

SESSIONS

Once a week

Total: 4 sessions

NOTES

ELECTRODE RES, ELECTRODE RES Longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 min, and then rinse with water.

ELECTRODE CAP, ELECTRODE CAP longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water.

Disinfect the handles for ELECTRODES and returnable ELECTRODES using the products used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año

97

Sección 2ª,
2020 . DOY FE:

[Signature]

AUXILIARY TREATMENT OF URINE STRESS CONTINUITY

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.


RECOMMENDATIONS

We recommend this procedure after more targeted therapy or as a concomitant treatment to improve the end result. Treatment should be accompanied by exercise and a healthy diet.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Temperature:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Hygiene:** INDIBA representatives recommend the use of nitrile or latex disposable gloves (not supplied).

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

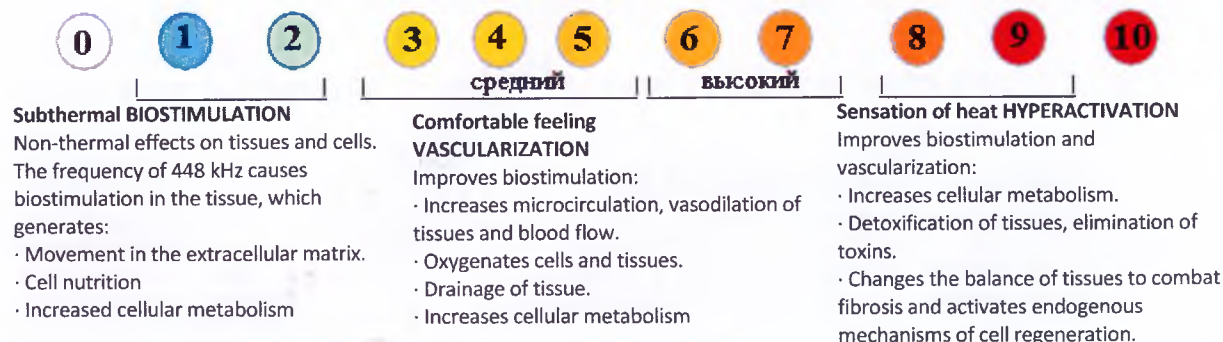


This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or transmit it in whole or in part without the written consent of INDIBA, S.A. Все нарушения будут преследоваться по закону.

PROTOCOL FOR THE TREATMENT OF POST-PERMANENT INJURY (NOT IN ACUTE PHASE) (20min)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

Speed up the healing process. Fibrosis treatment. Pain relief. Restoring vaginal elasticity. Activation of neocalogenesis. Stimulation of contractility and activation of local neocollagenesis. Improving tissue elasticity.

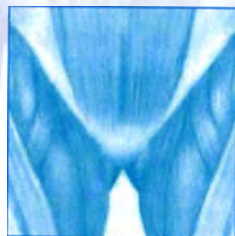

POSITION

Lithotomy position. Reversible flat electrode on the lumbosacral

DESCRIPTION OF STAGES OF THE PROCEDURE

External application: CAP 30-40 mm: 5 min IAS* 6-7

Internal application: ELECTRODE RES longitudinal: 15 min IAS* 6

В случае, если Internal application невозможно, использовать ELECTRODE RES 35 mm

APPLICATION DATA

External use: Perform circular or linear movements depending on the patient's anatomy. Maintain sufficient pressure to ensure perfect contact between the skin and the entire surface of ELECTRODE.

Internal application: ELECTRODE should be fully in contact with the vaginal wall. Before starting the procedure, ELECTRODE must be completely immersed in the vagina. Be sure to stop the procedure before removing the ELECTRODE.

SESSIONS

Once a week

Total: 8 sessions

Other specific treatments are also recommended.

NOTES

ELECTRODE RES, ELECTRODE RES Longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water. Then apply a disinfectant that is intended for professional use (phenol or glutaraldehyde 2%) for 30 min, and then rinse with water.

ELECTRODE CAP, ELECTRODE CAP longitudinal: for individual use only. Clean ELECTRODE twice with soapy water.

Disinfect the handles for ELECTRODES and returnable ELECTRODES using the products used in the hospital. If in doubt, contact the manufacturer.

* IAS = аналоговая шкала INDIBA

Протокол составлен в сотрудничестве с доктором Джэки Каллеха, Clínica BMUM, г. Мадрид, Испания

Ha causado el asiento nº
de mi Libro Indicador del año 2020. DOY FE
97 Sección 2ª
2020. DOY FE

PROTOCOL FOR THE TREATMENT OF POST-PERMANENT INJURY (NOT IN ACUTE PHASE)

INDIBA
DEEP CARE
MEDICAL PROIONIC SYSTEM

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Крем электропроводящий Care Cream

RECOMMENDATIONS

We recommend this procedure after more targeted therapy or as a concomitant treatment to improve the end result. Treatment should be accompanied by exercise and a healthy diet.

CONTRAINDICATIONS

The procedure should not be carried out in the presence of a pacemaker or other electronic implants, in pregnant women, in case of skin wounds (open wounds or recent burns), thrombophlebitis and lack of sensitivity. Not contraindicated in the presence of implants


COMMENTS

The proposed protocols are general and should be adapted to the individual requirements or circumstances of the patient, taking into account age, hormone imbalance, concomitant conditions, lifestyle, quality of life and history of surgical intervention. All of these factors can affect the end result. For external use only.

APPLICATION TECHNOLOGY

1. **Position:** hold the electrode evenly on the surface of the body; do not tilt.
2. **Pressure:** maintain sufficient pressure to ensure adequate contact between the skin and the surface of the electrode. The pressure should be stable and not cause discomfort to the patient.
3. **Speed:** move the electrode in a circular motion, each time slowly increasing the diameter of the circle. Movements should be slow (one circle per second) and smooth.
4. **Temperature:** ensure that the temperature is suitable for the patient and is comfortable.
5. **Hygiene:** INDIBA representatives recommend the use of nitrile or latex disposable gloves (not supplied).

Patient sensations based on IAS value (IAS = INDIBA analog scale)

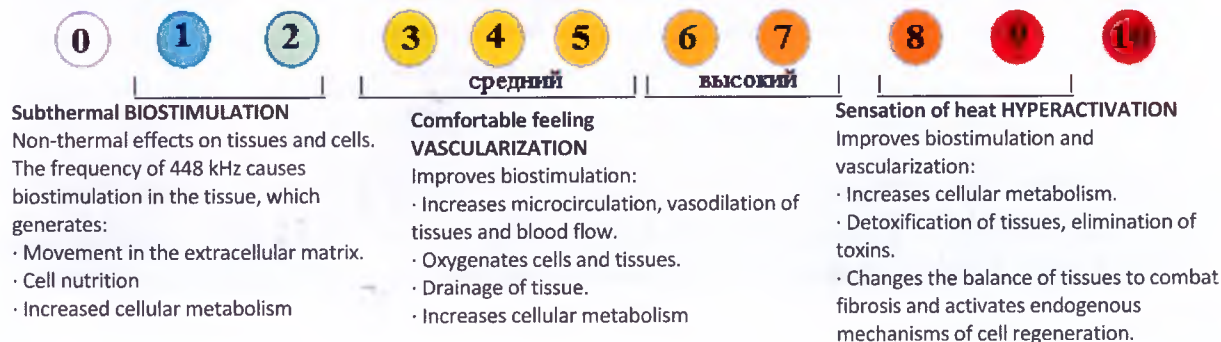

DU1974053

2017



LEGITIMACIÓN DE FIRMA

Yo, **ALFONSO CARBONELL AGUILAR**, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUNYA, con residencia en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), DOY FE: Que considero legítima la firma que antecede de **DON CARLOS JANER BORRELL**, provisto de DNI número 44.003.556-W, estampada en el presente documento redactado en ruso, que no entiendo, y su traducción en inglés, cuyo idioma entiendo, por ser aparentemente iguales a la que aparece en la matriz número 2043 de mi protocolo de fecha 8 de noviembre de 2019. -----

Ha causado el asiento número **NOVENTA Y SIETE**, sección 2ª de mi Libro Indicador del año 2020. ----

En Sant Quirze del Vallès, veinte de febrero de dos mil veinte. DOY FE. -----



Alfonso Carbonell

This protocol, which is exclusively owned by INDIBA, S.A., is protected by intellectual property law and may only be used by the rightful owners of the relevant equipment. Therefore, it is forbidden to reproduce, modify, distribute or publish it in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system. All rights reserved. INDIBA, S.A., выпускаемого в письменной форме. Все нарушения будут преследоваться по закону.



FA9735767

6/2019

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de Don Alfonso Carbonell Aguilar, Notario de Sant Quirze del Vallès, Colegio Notarial de Cataluña, en legitimación de firma de don Carlos Janer Borrell, en documento en relación a INDIBA, S.A., libro indicador 97, de 20 de febrero de 2020, en el folio DU1974053.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ESPAÑA

Country / Pays :

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por Don Alfonso Carbonell Aguilarhas been signed by
a été signé par**3. quien actúa en calidad de** Notarioacting in the capacity of
agissant en qualité de**4. y está revestido del sello / timbre de** la Notaríabears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de**Certificado**

Certified / Attesté

5. en Barcelona
at / à**6. el día** 21/02/2020
the / le**7. por** Don Joan Carles Farrés Ustrell, Tesorero del Colegio Notarial de Cataluña
by / par**8. bajo el número** N5301/2020/008386
No
sous no**9. Sello / timbre:**
Seal / stamp:
Sceau / timbre:**10. Firma:**
Signature:
Signature :

Joan Carles Farrés Ustrell, Tesorero

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:uLUk-zDCO-1/UH-mGYQ

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille: NA:uLUk-zDCO-1/UH-mGYQ

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

000 ЦРММ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU [Non de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:uLUk-zDCO-1/UH-mGYQ

Логотип

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор и
представитель руководства

Карлос Ханер <подпись>

27/01/2020

Данный акт зарегистрирован
под номером 97, раздел 2-ой,
моего Реестра 2020 года.
УДОСТОВЕРЯЮ

<подпись>

08/2017

/гербовый знак/

/Марка для заверки документов/: 0.15 €

/Печать/: ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА АЛЬФОНСО КАРБОНЕЛЛА АГИЛАРА * САН-КИРЗЕ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС/

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

Я, **АЛЬФОНСО КАРБОНЕЛЛ АГИЛАР**, НОТАРИУС ВЫСОКОЧТИМОЙ КОЛЛЕГИИ НОТАРИУСОВ КАТАЛОНИИ из Сан-Кирзе-дель-Вальес (Барселона), УДОСТОВЕРЯЮ: что считаю подлинной вышестоящую подпись **КАРЛОСА ХАНЕРА БОРРЕЛЛА**, владельца национального удостоверения личности номер 44.003.556-W, поставленную на настоящем документе, составленном на русском языке, который я не понимаю, и его переводе на английский язык, который я понимаю, на основании того, на основании того, что настоящая подпись идентична подписи, содержащейся в акте номер 2043 моего протокола от 8 ноября 2019 года.

Данный акт зарегистрирован под номером **ДЕВЯНОСТО СЕМЬ**, раздел 2-ой, моего Реестра 2020 года.

Выдано в Сан-Кирзе-дель-Вальес, двадцатое февраля две тысячи двадцатого года. УДОСТОВЕРЯЮ.

/Подпись/

/Печать/: ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА АЛЬФОНСО КАРБОНЕЛЛА АГИЛАРА * САН-КИРЗЕ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС/

/Марка для заверки документов/: 0,15 € * КОЛЛЕГИИ НОТАРИУСОВ * ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * A082324209/

/Нотариальная наклейка/: НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ * ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ НОТАРИАТА ИСПАНИИ * НОТАРИАТ ЕВРОПЫ * ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * 0253094763/

БЛАНК ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

06/2019 /гербовый знак/ /Марка для заверки документов/: 0,15 € FA9735767

Настоящий лист является приложением к документу, на котором стоит подпись г-на Альфонсо Карбонелла Агилара, нотариуса из Сан-Кирзе-дель-Вальес, Коллегии Нотариусов Каталонии, удостоверяющим подпись г-на Карлоса Ханера Боррелла на документе, относящимся к компании «ИНДИБА С.А.», Реестр 97 от 20 февраля 2020 года, на листе DU1974053.

АПОСТИЛЬ (Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)	
1. Страна: ИСПАНИЯ	
Настоящий официальный документ	
2. был подписан Альфонсо Карбонеллом Агиларом	
3. выступающим в качестве Нотариуса	
4. и скреплен печатью/штампом Нотариальной конторы	
Удостоверено	
5. в Барселоне	6. дата 21/02/2020
7. г-ном Джоаном Карлесом Фарресом Устреллом, казначеем Коллегии Нотариусов Каталонии	
8. под номером N5301/2020/008386	
9. Печать/штамп: ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * КОЛЛЕГИЯ НОТАРИУСОВ КАТАЛОНИИ* Марка для заверки документов/: 0,15 € * КОЛЛЕГИИ НОТАРИУСОВ * ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * A332396059 /Нотариальная наклейка/: НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ * ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ НОТАРИАТА ИСПАНИИ * НОТАРИАТ ЕВРОПЫ * ДОВЕРИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО * 0253451788	10. Подпись: /Подпись/ Джоан Карлес Фаррес Устрелл, казначей

Данный Апостиль удостоверяет только подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и подлинность печати или штампа, скрепляющей (-его) документ.


Данный Апостиль не удостоверяет содержание документа, на котором он был проставлен.

[Данный Апостиль не подлежит использованию на территории Испании]

[Данный Апостиль можно проверить по адресу: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Код проверки Апостиля: NA: S9L+-WKaX-DKuM-KtMn

Перевод данного текста выполнен переводчиком Ясыбаи Андреем Афанасьевичем

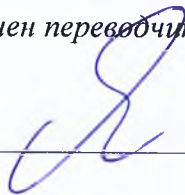

Российская Федерация
Город Москва
Второго марта две тысячи двадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ясыбаи Андрея Афанасьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2020 – 20-2348

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.



Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 248 лист(-а, -ов).

Нотариус:

