

Инструкция по применению

**Медицинского изделия: Набор инструментов
хирургических, приспособлений и компонентов
примерочных для установки эндопротезов коленного
сустава с принадлежностями**

Производитель:

**«Зиммер Инк.», США (Zimmer Inc., USA)
Офис: 345 E.Main St., Warsaw, IN, 46580, USA
Адрес основного производства: 1800 West Center Street
Warsaw, Indiana 46580, USA**

Место производства:

- 1) Zimmer Inc., США (Зиммер Инк., США)
1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46580, USA**
- 2) Zimmer Manufacturing B.V., Пуэрто-Рико (Зиммер Мануфакчуринг Б.В., Пуэрто-Рико)
Route #1, K.M. 123.4, Turpeaux Industrial Park, Mercedita 00715, Puerto Rico**

1. Наименование медицинского изделия

Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава, в составе:

Сверло тибиальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм.

Рукоятка для пластины примерочной тибиальной PERSONA.

Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA (при необходимости):

- Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 4 градуса;
- Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 5 градусов;
- Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 6 градусов.

Направитель опилочного блока фиксированный PERSONA (при необходимости).

Направитель опилочного блока регулируемый PERSONA (при необходимости).

Стержень интрамедуллярный PERSONA 8 мм (при необходимости).

Рукоятка модульная PERSONA (при необходимости).

Пластина резекционная дистальная PERSONA (при необходимости):

- Пластина резекционная дистальная PERSONA 1 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 2 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 3 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 4 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 5 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 6 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 7 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 8 мм;
- Пластина резекционная дистальная PERSONA 9 мм.

Молоток скользящий PERSONA (при необходимости).

Определитель размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки (при необходимости).

Штанга определителя размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки (при необходимости).

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки (при необходимости):

- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 3;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 4;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 5;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 6;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 7;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 8;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 9;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 10;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 11;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 12.

Блок опилочный PERSONA PS (при необходимости):

- Блок опилочный PERSONA PS, размер 1-2.
- Блок опилочный PERSONA PS, размер 3-5;
- Блок опилочный PERSONA PS, размер 6-9;
- Блок опилочный PERSONA PS, размер 10-12.

Позиционер опилочного блока PERSONA (при необходимости).

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки (при необходимости):

- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 1;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 2;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 3;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 4;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 5;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 6;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 7;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 8;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 9;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 10;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 11;
- Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 12.

Определитель размера компонента бедренного PERSONA, передней ориентировки (при необходимости).

Определитель размера компонента бедренного со штангой блокирующей PERSONA, передней ориентировки (при необходимости).

Инсертер/Экстрактор бедренный PERSONA (при необходимости).

Прокладка импактора бедренного PERSONA PS (при необходимости).

Прокладка импактора бедренного PERSONA CR (при необходимости).

Инсертер вкладыша тибиального PERSONA (при необходимости).

Направитель проксимальный PERSONA EM (при необходимости).

Стержень дистальный PERSONA EM (при необходимости).

Струбцина для лодыжки PERSONA EM (при необходимости).

Стилус тибиальный PERSONA EM 2/10 мм (при необходимости).

Адаптер стержня PERSONA (при необходимости).

Направитель вальгусный выравнивающий регулируемый бедренный PERSONA (при необходимости).

Направитель сверла тибиального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм (при необходимости).

Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA (при необходимости):

- Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер A-B;
- Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер C-D;
- Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер E-F;
- Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер G-H;
- Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер J.

Рукоятка инсертора/экстрактора рашпиля тибиального PERSONA (при необходимости).

Блок опилочный тибиальный универсальный PERSONA (при необходимости):

- Блок опилочный тибиальный универсальный PERSONA 3 градуса;
- Блок опилочный тибиальный универсальный PERSONA 7 градусов.

Блок опилочный тибиальный PERSONA (при необходимости):

- Блок опилочный тибиальный PERSONA левый 3 градуса;
- Блок опилочный тибиальный PERSONA левый 7 градусов;
- Блок опилочный тибиальный PERSONA правый 3 градуса;
- Блок опилочный тибиальный PERSONA правый 7 градусов.

Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA (при необходимости):

- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер A;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер B;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер C;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер D;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер E;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер F;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер G;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер H;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер J.
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер A;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер B;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер C;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер D;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер E;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер F;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер G;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер H;
- Пластина примерочная тиббиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер J.

Спейсер PERSONA FuZion (при необходимости):

- Спейсер PERSONA FuZion левый;
- Спейсер PERSONA FuZion правый.

Пластина корректирующая PERSONA FuZion (при необходимости):

- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 11 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 12 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 13 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 14 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 16 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 18 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 20 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 11 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 12 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 13 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 14 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 16 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 18 мм;
- Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 20 мм.

Натяжитель бедренный PERSONA FuZion (при необходимости):

- Натяжитель бедренный PERSONA FuZion левый;
- Натяжитель бедренный PERSONA FuZion правый.

Натяжитель тиббиальный PERSONA FuZion (при необходимости):

- Натяжитель тиббиальный PERSONA FuZion левый;
 - Натяжитель тиббиальный PERSONA FuZion правый.
- Пластина бедренная PERSONA FuZion +0 мм (при необходимости):
- Пластина бедренная PERSONA FuZion левая +0 мм;
 - Пластина бедренная PERSONA FuZion правая +0 мм.
- Пластина бедренная PERSONA FuZion +9 мм (при необходимости).
- Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 (при необходимости):
- Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 левый;
 - Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 правый.
- Направитель сверла PERSONA FuZion (при необходимости).
- Стилус для определителя размера PERSONA FuZion, задней ориентировки (при необходимости).
- Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion (при необходимости):
- Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, левый;
 - Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, правый.
- Блок примерочный PERSONA PS (при необходимости):
- Блок примерочный PERSONA PS узкий левый, размер 1-2;
 - Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 3-5;
 - Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 6-9;
 - Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 10-12;
 - Блок примерочный PERSONA PS узкий правый, размер 1-2;
 - Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 3-5;
 - Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 6-9;
 - Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 10-12.
- Компонент примерочный бедренный PERSONA PS (при необходимости):
- Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 1;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 2;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 3;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 4;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 5;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 6;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 7;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 8;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 9;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 10;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 11;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 12;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 1;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 2;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 3;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 4;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 5;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 6;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 7;
 - Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 8;

-

- 

 00

- 1

[illegible]

- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 1-2/AB, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-6/AB, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 1-2/CD, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-9/CD, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-11/EF, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 7-12/GH, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 9-12/J, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 1-2/AB, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-6/AB, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 1-2/CD, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-9/CD, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-11/EF, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 7-12/GH, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 9-12/J, верхний.

- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/AB, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-4/AB, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/CD, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-7/CD, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 4-11/EF, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 7-12/GH, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 9-12/J, верхний;
- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/AB, верхний;

- Вкладыш примерочный тиббальный PERSONA MC верхний (при необходимости):**

- Вкладыш примерочный тиббальный PERSONA PS верхний (при необходимости):**

- 9

- Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS верхний (при необходимости):**

- Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тиббиального PERSONA (при необходимости):**

- 10

-

-

-

-

-

необходимости).

Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм (при необходимости).

Блок опилочный дистальный PERSONA 0 градусов (при необходимости).

Ограничитель сверла тибиального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм (при необходимости).

Сверло тибиальное для ножки удлиняющей PERSONA (14x30мм), диаметр 15.7 мм (при необходимости).

Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм (при необходимости).

Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм (при необходимости).

Стержень выравнивающий (при необходимости).

Стержень выравнивающий с муфтой (при необходимости).

Извлекатель шпилек NexGen (при необходимости).

Рукоятка быстроразъемная NexGen (при необходимости).

Адаптер выравнивающий NexGen (при необходимости).

Блок резекционный NexGen повторного вальгусного среза 2 градуса (при необходимости).

Блок резекционный NexGen повторного варусного среза 2 градуса (при необходимости).

Направитель остеотомии надколенника NexGen (при необходимости).

Зажим надколенника NexGen (при необходимости).

Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen (при необходимости):

- Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 26;
- Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 29;
- Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 32;
- Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 35;
- Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 38;
- Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 41.

Штангенциркуль для бедренного компонента NexGen (при необходимости).

Шаблон примерочный надколенника NexGen (при необходимости).

Сверло бедренное NexGen, размер A,B (при необходимости).

Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen (при необходимости):

- Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 26 мм толщина 7.5 мм;
- Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 29 мм толщина 8.0 мм;
- Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 32 мм толщина 8.5 мм;
- Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 35 мм толщина 9.0 мм;
- Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 38 мм толщина 9.5 мм;
- Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 41 мм толщина 10.0 мм.

Экстрактор ножки примерочной тибиальной NexGen (при необходимости).

Шпилька фиксирующая с короткой головкой NexGen 25 мм (при необходимости).

Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов) (при необходимости).

Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм (при необходимости).

Блок примерочный MIS Quad-Sparing (при необходимости):

- Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 10 мм;
- Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 12 мм;
- Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 14 мм.

Отвертка торсионная шестигранная NexGen 2.0 мм (при необходимости).

Стержень бедренный интрамедуллярный NexGen (при необходимости).

Рукоятка Т-образная модульная NexGen (при необходимости).

Направитель бедренный выравнивающий вальгусный NexGen (при необходимости).

Блок резекционный бедренный дистальный NexGen (при необходимости).

Блок опилочный фиксированный/без фиксации 0 градусов NexGen (при необходимости).

Принадлежности:

Контейнер для инструментов одноуровневый.

Контейнер для инструментов малый (1/2).

Контейнер для инструментов основной.
 Контейнер для инструментов основной малый (1/2).
 Контейнер для шпилек.
 Контейнер для инструментов тибиаьный основной PERSONA.
 Контейнер для инструментов бедренный основной PERSONA.
 Контейнер для инструментов для надколенника PERSONA.
 Контейнер для инструментов CR/UC правых PERSONA.
 Контейнер для инструментов CR/UC левых PERSONA.
 Панель съемная для контейнера для инструментов с линиями.
 Панель съемная для контейнера для инструментов.
 Панель съемная для контейнера для инструментов прямоугольная с линиями.
 Поддон для инструментов 101.6 мм.
 Крышка контейнера для инструментов базовая.
 Крышка контейнера для инструментов основная.
 Крышка контейнера для инструментов малая (1/2).
 Секция для контейнера для сверел 15,7 мм PERSONA.
 Секция для контейнера для рашпелей A-B PERSONA.
 Секция для контейнера для рашпелей C-D PERSONA.
 Секция для контейнера для рашпелей E-F PERSONA.
 Секция для контейнера для рашпелей G-H PERSONA.
 Секция для контейнера для рашпелей J PERSONA.
 Секция для контейнера для инструментов передней ориентировки PERSONA.
 Секция Вальгус/Варус для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция для контейнера спейсеров 10 мм PERSONA.
 Секция для контейнера спейсеров 12 мм PERSONA.
 Секция для контейнера спейсеров 14 мм PERSONA.
 Секция для контейнера для проксимального направителя EM PERSONA.
 Секция для контейнера для дистального стержня EM PERSONA.
 Секция для контейнера для трубки для лодыжки EM PERSONA.
 Секция для контейнера тибиаьного стилуса PERSONA.
 Секция для контейнера адаптера направителя PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса правая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов правая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 правая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 правая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 правая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 правая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 4-5 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 левая PERSONA.
 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 левая PERSONA.

16

Секция MC TASP Top 4-9/CD левая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 4-11/EF левая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 8-12/GH левая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 12/J левая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 1-4/AB правая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 4-9/CD правая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 4-11/EF правая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 8-12/GH правая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция MC TASP Top 12/J правая для контейнера для инструментов PERSONA.
 Секция для контейнера тибального импактора размер A-D PERSONA.
 Секция для контейнера тибального импактора размер E-F PERSONA.
 Секция для контейнера тибального импактора размер G-J PERSONA.
 Секция для контейнера сверла бедренного размера AB
 Секция для контейнера интермедуллярного направителя 8 мм PERSONA.
 Секция для контейнера вальгусного регулируемого направителя PERSONA.
 Секция для контейнера дистальной резекционной пластины 9 мм PERSONA.
 Секция для контейнера направителя опилочного блока регулируемого PERSONA.
 Секция для контейнера дистального опилочного блока PERSONA.
 Секция для контейнера рукоятки модульной PERSONA.
 Секция для контейнера отвертки для аугментов PERSONA.
 Секция для контейнера блокирующего винта PERSONA.
 Секция для контейнера экстрактора тибального PERSONA.
 Секция для контейнера определителя размера задней ориентировки PERSONA.
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных AB PERSONA.
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных CD PERSONA.
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных EF PERSONA.
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных GH PERSONA.
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных J PERSONA.
 Секция для контейнера позиционера опилочного блока PERSONA.
 Секция для контейнера ограничителя цементной мантии PERSONA.
 Инструмент для снятия секции.

2. Назначение, принцип и условия применения, требования по безопасности, показания к применению, противопоказания, меры предосторожности и возможные побочные эффекты, критерии отказа, данные о применении изделия

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями предназначен для установки эндопротезов коленного сустава во время хирургической операции.

2.2 ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием изделия, выведенного на рынок компанией «Зиммер», хирург должен тщательно изучить следующие рекомендации, предупреждения и инструкции, а также доступную информацию, касающуюся изделия (например, публикации, касающиеся изделия, и материалы по хирургической технике). Компания «Зиммер» не несет ответственности за осложнения, возникшие в результате использования данного изделия в целях, не соответствующих указанным, а также в результате несоблюдения хирургической техники или принятия неверных решений, выбора продукта и в связи подобными ситуациями вне контроля компании «Зиммер».

Несоблюдение данных инструкций может привести к поломке инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями, а также может стать причиной возникновения побочных эффектов в отношении пользователя или пациента.

Используйте только те инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями, которые специально предназначены для применения с соответствующими изделиями, за исключением инструментов общего назначения и/или инструментов, описанных в руководстве по хирургической технике для конкретного изделия. Компания не несет ответственности в случае использования изделий, предоставленных сторонними производителями.

Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями должен применяться квалифицированными специалистами в лечебных учреждениях.

Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями должен применяться в операционных в соответствии с хирургическими техниками и рекомендациями для конкретных имплантатов квалифицированными специалистами.

Неправильное использование снижает срок службы изделия и/или увеличивает риск травмы. Повторная обработка в соответствии с рекомендациями производителя будет оказывать минимальный эффект на ручные инструменты многократного применения компании «Зиммер». Конец срока эксплуатации, как правило, определяется износом и повреждениями, вызванными использованием.

Если не указано иное, линейки и штангенциркули с нанесенными на шкалу размерами имеют точность $\pm 1/2$ наименьшего деления на шкале.

2.3 ПОКАЗАНИЯ

Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями предназначен для установки эндопротезов коленного сустава во время хирургической операции.

2.4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не допускается использование инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных и принадлежностей к ним, которые не являются специально предназначенными для конкретных имплантатов. Иных противопоказаний относительно применения не имеется.

2.5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Весь медицинский персонал, работающий с зараженным или потенциально зараженным медицинским изделием, должен соблюдать общепринятые меры предосторожности. Необходимо соблюдать осторожность при работе с инструментами, имеющими режущие поверхности и острия.
- Не используйте режущие/острые инструменты с затупленными или деформированными краями или инструменты, которые деформированы, имеют признаки коррозии, повреждены или изношены. Гарантировать их надлежащую работу невозможно.
- Перед стерилизацией инструменты требуется полностью очистить. Стерилизация неочищенных инструментов может быть неэффективна.
- Автоматическая очистка может оказаться неэффективной. Рекомендуется выполнять тщательную ручную очистку.
- Не подвергайте инструменты высоким нагрузкам и/или сильным ударам, поскольку существует вероятность их поломки.
- Не подвергайте инструменты из простого или анодированного алюминия или титана воздействию кислотных или щелочных чистящих средств. Инструменты из нержавеющей стали нельзя обрабатывать хлористыми или хлорсодержащими средствами. Возможно возникновение коррозии или обесцвечивание.
- Не выполняйте чистку полиэфиримидных компонентов моющими средствами на основе фенола. Возможно образование трещин.
- Дезинфекция многоцветных хирургических инструментов допустима только в качестве дополнительной меры в сочетании с полной стерилизацией.
- Не допускается изменение изделия, если это явно не предусмотрено конструкцией и хирургической техникой для конкретного изделия.

2.6 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Возможно разрушение поверхности инструментов (примерочных компонентов) из полимерных материалов вследствие воздействия высоких температур и химических соединений, используемых для очистки и стерилизации паром в медицинских учреждениях. Если такое разрушение затрудняет очистку, или на поверхности образуется налет, замените инструмент (примерочный компонент).
- Рашпили – важно, чтобы рашпиль продвигался вперед при каждом ударе хирургическим молотком. Если рашпиль не продвигается или затупился, существует большой риск перелома кости или вклинивания рашпиля.
- Канюлированные инструменты - очищайте канюлированные инструменты во время оперативного вмешательства, чтобы предотвратить накопление остатков органических веществ.
- Любое решение об удалении сломанного сверла или его фрагментов принимается по усмотрению хирурга и должно учитывать все связанные риски.
- Любое решение об оставлении сломанных или расколовшихся инструментов также принимается по усмотрению хирурга и должно учитывать все связанные риски.
- Проволочные проводники — многократно проверяйте положение проволочных проводников под рентгеноскопическим контролем, чтобы предупредить непреднамеренное

продвижение направляющей спицы и/или ее проникновение в окружающие ткани.

- Металлические инструменты или фрагменты можно обнаружить с помощью рентгенографии или рентгеноскопии. Поскольку неметаллические инструменты или фрагменты невозможно обнаружить с помощью рентгенографии или рентгеноскопии, их следует сосчитать по завершении хирургической процедуры.

2.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

- Во время ручной очистки запрещено использовать металлические щетки и скребки. Эти материалы могут повредить поверхность и покрытие инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных. Используйте мягкие нейлоновые щетки и ершики.

- Не складывайте инструменты вместе, не ставьте на хрупкие инструменты тяжелые предметы.

- Для ручной очистки следует использовать чистящие агенты с низким пенообразованием, чтобы инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные были видны в моющем растворе. При ручной очистке всегда держите инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные под поверхностью моющего раствора во избежание формирования аэрозолей и брызг, с которыми могут распространяться загрязняющие агенты. Следует прополоскать изделия до полного удаления чистящих агентов, чтобы избежать скопления осадка детергентов на их поверхности.

- Физиологический раствор и чистящие/ дезинфицирующие агенты, содержащие альдегиды, ртуть, активный хлор, бром, бромиды, йод или йодиды, вызывают коррозию и запрещены к использованию. Запрещено помещать или замачивать инструменты в растворе Рингера.

- Запрещено использовать в автоклавах средства для удаления накипи, содержащие морфолин. Подобные средства оставляют осадок, который со временем может привести к повреждению полимерных инструментов. Удалять накипь с поверхности автоклава следует в соответствии с инструкциями производителя.

- По возможности инструменты, состоящие из нескольких компонентов, перед очисткой следует разобрать. Разборка, если таковая требуется, обычно не вызывает сложностей.

- Удалите загрязненные инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные на месте их использования с металлического или полимерного подноса и поместите в раствор, чтобы избежать высыхания. Затем перенесите их в место обработки для ручной и/или автоматизированной очистки. Не чистите грязные инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные на полимерном или металлическом подносе.

- Стерилизовать изделия «Зиммер» этиленоксидным (ЭО), газоплазменным и методом сухого жара не рекомендуется.

- Избегайте использования жесткой воды. Для первого полоскания можно использовать смягченную проточную воду. Для последнего полоскания используйте очищенную (напр., фильтром ультра-тонкой очистки (UF), обратноосмотическим способом (RO), деионизированную (DI) или другими в равной степени эффективными способами) воду, чтобы удалить с инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных остатки минеральных отложений.

- Для очистки изделий для многократного использования «Зиммер» рекомендуются и предпочтительны pH-нейтральные, ферментные и щелочные (pH ≤ 12) агенты. Щелочные агенты с pH ≤ 12 допускается использовать для очистки инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных из нержавеющей стали и полимеров в тех странах, где того требуют нормы законодательства или предписания местных органов власти, либо в странах с повышенной заболеваемостью трансмиссивной губчатой энцефалопатией (ТГЭ) и болезнью Крейтцфельда-Якоба (БКЯ). Крайне важно тщательно прополоскать инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные после обработки щелочными агентами до их полного удаления.

- Для контроля определенных видов вирусов в качестве необходимого этапа может быть введено замачивание в дезинфицирующем растворе. Данные агенты могут привести к потере цвета или повреждению поверхности инструмента (в бытовых отбеливателях содержатся или при их растворении образуются хлорины и хлориды, которые обладают коррозионным эффектом, подобно щелочным агентам). Дезинфектанты, содержащие глутаральдегид или другие альдегиды, могут привести к денатурации белковых загрязнителей, что делает их более твердыми и усложняет процесс удаления. По возможности следует избегать замачивания в дезинфицирующих растворах.

- В контейнеры и поддоны для инструментов «Зиммер» допускается помещать только изделия, изготовленные и (или) распространяемые компанией «Зиммер». Указания компании «Зиммер» по обработке инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных неприменимы, если в контейнерах находятся изделия, которые не выпущены и (или) не поставлены компанией «Зиммер».

- Общий вес упакованного контейнера или поддона для инструментов не должен превышать 11,4 кг.

- Компоненты модульных изделий необходимо стерилизовать по отдельности, для уменьшения вероятности образования микрофлоры в мертвом пространстве и предотвращения расширения/сжатия.

- Валидация процедур очистки, стерилизации и повторной стерилизации, а также проверка правильности настроек соответствующего оборудования должны проводиться регулярно.

2.8 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможные побочные эффекты могут быть вызваны самим фактом хирургического вмешательства. Иных побочных эффектов при применении не имеется.

Данные клинических исследований и информация в государственных реестрах, как правило, относятся к имплантатам, а не к инструментам хирургическим, приспособлениям, компонентам примерочным. Несмотря на это, клиническая безопасность и эффективность применения инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных полностью подтверждается клиническими свидетельствами, представленными в отчетах по использованию имплантатов, установленных с применением данных инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных.

2.9 КРИТЕРИИ ОТКАЗА

Следующие критерии приведены с целью оказания помощи пользователю для определения пригодности для применения инструментов, приспособлений, примерочных компонентов, принадлежностей при оценке степени изношенности инструмента

При наличии следующих признаков дальнейшее применение изделия не рекомендуется:

Критерий отказа	Описание	Способ проверки
Изгиб рабочих частей изделия	Изгибание, перекручивание, искривление рабочих частей, ослабленные витки; изгиб, сгибание, искривление, деформация режущих кромок.	<i>Быстрая проверка прокатыванием по наклонной поверхности.</i> Действие: Инструмент прокатывают по наклонной поверхности. Результат: Если инструмент не прокатывается свободно, износ присутствует. Описание: изогнутые, согнутые или искривленные корпуса, основания, держатель, кронштейны контейнеров, поддонов и секций.
Изменение цвета	Обесцвечивание маркировки изделия, обесцвечивание	<i>Быстрая проверка на читаемость.</i> Действие: Читают маркировку на

	маркировки изделий из-за коррозии	инструменте. Результат: Если маркировка на инструменте неразборчива или трудночитаема, износ присутствует.
Коррозия	Коррозия поверхности, точечная коррозия	<i>Быстрая проверка карандашной резинкой.</i> Действие: Карандашной резинкой трут затронутую область. Если обесцвечивание устраняется при помощи резинки, это загрязнение. Результат: Если обесцвечивание не устраняется при помощи резинки или выявляется точечная коррозия, износ присутствует. Описание: Контактная коррозия, коррозия внешней / внутренней резьбы. <i>Быстрая проверка резьбы.</i> Действие: Компоненты с резьбовым соединением соединяют. Результат: В случае затруднений при затягивании или ослаблении крепления компонентов износ присутствует. Описание: обесцвечивание маркировки изделий из-за коррозии. <i>Быстрая проверка на читаемость.</i> Действие: Читают маркировку на инструменте. Результат: Если маркировка на инструменте неразборчива или трудночитаема, износ присутствует.
Повреждение инструмента	Поломка, трещина в изделии	При наличии данных признаков износ присутствует
Повреждение резьбы	Наружная/внутренняя резьба сорвана или повреждена	<i>Быстрая проверка резьбы.</i> Действие: Компоненты с резьбовым соединением соединяют. Результат: В случае затруднений при затягивании или ослаблении крепления компонентов износ присутствует. Описание: Контактная коррозия, коррозия внешней / внутренней резьбы.
Повреждение поверхности	Царапины на поверхности, повреждение поверхности; бороздки, зазубрены, сколы, заусенцы, царапины, выемки,	<i>Быстрая проверка ногтем.</i> Действие: Проводят ногтем по поверхности. Результат: Если движение ногтя затруднено/наличествует сопротивление, износ присутствует. Описание: удаление покрытия, повреждение шлицей отвертки, скругление краев рабочих поверхностей (преимущественно для режущих поверхностей), повреждение режущих кромок,

		Результат: При наличии данных признаков износ присутствует. * Все изделия перед проверкой должны пройти процедуры очистки, дезинфекции и стерилизации.
--	--	--

2.10 ДАННЫЕ О ПРИМЕНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

Пациентов располагают на операционном столе в положении лежа на спине. Может применяться общая, спинальная или эпидуральная анестезия. Перед разрезом кожи проводится профилактическое введение антибиотиков.

Вскрытие коленного сустава обычно проводят посредством срединного или медиального парapatеллярного разреза кожи. Подкожные доступы под широкими мышцами и по их середине часто применяются в рамках «мини-инвазивных» методик. Обычно вначале проводится высвобождение капсулы. В большинстве случаев тотального эндопротезирования коленного сустава пытаются максимально сохранить целостность медиальной и латеральной коллатеральных связок. Переднюю крестообразную связку обычно разрушают (при ее наличии на момент вмешательства), а заднюю крестообразную связку сохраняют либо разрушают. Статус крестообразной связки поможет выбрать протез. Балансировка мягких тканей, обычно достигаемая путем частичного высвобождения коллатеральной связки на более скованной стороне коленного сустава, является критическим компонентом при тотальной артропластике коленного сустава. Успешная тотальная артропластика коленного сустава частично зависит от правильного повторного выравнивания нормальной нижней конечности, надлежащего баланса имплантата и ориентации, надежной фиксации имплантата и надлежащего баланса и стабильности мягких тканей.

Инструменты и техника помогает хирургам восстановить центральное расположение бедра, колена и лодыжки по прямой линии, создающей нейтральную механическую ось. Бедерный и тиббиальный компоненты располагаются перпендикулярно этой оси. Ротацию бедренной кости определяют, используя в качестве ориентира задние мышечки, ось, проходящую через надмыщелки или линию Уайтсайда. Инструменты позволяют произвести точные опилов для обеспечения надежной фиксации компонента.

Широкий выбор компонентов разного размера, формы и степени связанности позволяют улучшить установку компонента и баланс мягких тканей. Бедренную кость, большеберцовую кость и наколенник подготавливают по отдельности, и их можно опиливать в любой последовательности с использованием принципа измеренной резекции (удаляя достаточное количество костной ткани, чтобы обеспечить ее замещение протезом). Впоследствии может потребоваться производство коррекционных опилов.

Указания по применению инструментов, компонентов примерочных, приспособлений и принадлежностей из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями.

Все инструменты применяются исходя из знаний и квалификации хирурга, выбранной методики протезирования и состояния пациента.

Этап операции, методика хирургической процедуры, порядок применения	Краткое описание методики Данные о применении изделия	Применяемые инструменты
Подготовка пациента и хирургический доступ	Хирург может выбрать доступ мидвастус, доступ субвастус или медиальную парapatеллярную артротомию. Также, хирург самостоятельно решает, будет ли произведено выворачивание или вывих надколенника. Для подготовки конечности для тотального эндопротезирования коленного сустава необходимо надлежащее расслабление мышц.	Необходимые для выбранных процедур инструменты, компоненты примерочные, приспособления. Для подготовки инструментария применяются секции для контейнеров, контейнеры для инструментов, поддоны, крышки контейнеров, панели.

	Когда пациент обложен простынями на операционном столе и предварительно подготовлен, определите ориентиры хирургического разреза. Все применяемые в ходе хирургического вмешательства инструменты, компоненты, примерочные, приспособления должны пройти необходимые процедуры очистки, дезинфекции и стерилизации	
Дистальная резекция бедренной кости	Сборка регулируемого инструментария для дистальной резекции Регулировка оси бедренного компонента Выполнение дистальной резекции бедренной кости Альтернативные методики: Хирурги, предпочитающие выполнять дистальный срез под постоянным вальгусным углом у всех пациентов, могут использовать систему фиксированной дистальной резекции. Сборка фиксируемого инструментария для дистальной резекции Регулировка оси бедренного компонента Выполнение дистальной резекции бедренной кости Выполнение дистальной резекции бедренной кости с применением специфичных инструментов для бедренной резекции	Стержень интрамедуллярный 8 мм PERSONA Ручка модульная PERSONA Направитель вальгусный выравнивающий регулируемый бедренный PERSONA Направитель опилочного блока регулируемый PERSONA Блок опилочный дистальный PERSONA 0 градусов Пластина резекционная дистальная PERSONA (требуемого размера) Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм Адаптер стержня PERSONA Стержень выравнивающий с муфтой Направитель резекционный тиббиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов) Позиционер опилочного блока PERSONA Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки (требуемого размера) Извлекающий шпатель NexGen Пластина резекционная дистальная PERSONA (требуемого размера) Стержень интрамедуллярный PERSONA 8 мм Ручка модульная PersonA Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA (требуемый вариант) Направитель опилочного блока фиксированный PERSONA Блок опилочный дистальный PERSONA 0 градусов Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм Адаптер стержня PERSONA Стержень выравнивающий с муфтой Стержень интрамедуллярный PERSONA 8 мм Ручка Т-образная модульная NexGen Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA (требуемый вариант) Направитель бедренный выравнивающий вальгусный NexGen Блок резекционный бедренный дистальный NexGen Блок опилочный фиксированный/без фиксации 0 градусов NexGen Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм Стержень бедренный интрамедуллярный NexGen Извлекающий шпатель NexGen Молоток скользящий PERSONA

Резекция большеберцовой кости	Сборка экстремедуллярного выравнивающего направлятеля Расположение выравнивающего направлятеля Установка уровня резекции Выполнение резекции большеберцовой кости	Направитель проксимальный PERSONA EM Стержень дистальный PERSONA EM Струбцина для лодыжки PERSONA EM Блок опилочный тибиальный PERSONA (требуемый вариант) Блок опилочный тибиальный универсальный PERSONA (требуемый вариант) Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм Стипус тибиальный PERSONA EM 2/10 мм Адаптер стержня PERSONA Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов) Стержень выравнивающий с муфтой Изалекаль шпильки NexGen
	Дополнительная методика с использованием направлятелей повторного среза	Стержень выравнивающий с муфтой Блок резекционный NexGen повторного вальгусного среза 2 градуса Адаптер выравнивающий NexGen Адаптер стержня PERSONA Блок опилочный тибиальный PERSONA (требуемый вариант) Блок резекционный NexGen повторного варусного среза 2 градуса
Оценка баланса мягких тканей, получение оценки динамического ответа связок	После выполнения дистальной резекции бедренной кости и резекции большеберцовой кости установления баланса натяжения мягких тканей сустава при выравнивании оси конечности при сгибании и разгибании с помощью инструментов FuZion. Определить высоту зазора и угол при разгибании Определить высоту зазора и угол при сгибании, установить угол внешней ротации Определить угол оси заднего мыщелка при натяжении со стороны большеберцовой кости. После оценки осуществляется подбор оптимального размера и типа имплантата	Натяжитель бедренный PERSONA FuZion (требуемый вариант) Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion (требуемый вариант) Спейсер PERSONA FuZion (требуемый вариант) Направитель сверла PERSONA FuZion (требуемый вариант) Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 (требуемый вариант) Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки (требуемый вариант) Пластина корректирующая PERSONA FuZion (требуемый вариант) Стипус для определителя размера PERSONA FuZion, задней ориентировки Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion Пластина бедренная PERSONA FuZion +0 мм (требуемый вариант) Пластина бедренная PERSONA FuZion +9 мм Позиционер опилочного блока PERSONA Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов) Определитель размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки Штанга определителя размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки
Подбор размера и угла наружной ротации бедренного компонента	Определение размера и угла наружной ротации бедренного компонента Техника передней ориентировки предполагает использование кортикальной поверхности для установки переднезаднего положения бедренного компонента. Опилы заднего мыщелка могут производиться по-разному.	Определитель размера компонента бедренного PERSONA, передней ориентировки Определитель размера компонента бедренного со штангой блокирующей PERSONA, передней ориентировки Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм Изалекаль шпильки NexGen

	Техника задней ориентировки предполагает использование задней кортикальной оси для установки переднезаднего положения бедренного компонента.	Определитель размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки Штанга определителя размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм
Завершение переднего, заднего и косых опилов	Удаление остеофитов Завершение переднего опилов Завершение заднего опилов Завершение косых опилов Техника передней ориентировки Техника задней ориентировки	Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм Направитель резекционный тиббальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов) Молоток скользящий PERSONA Шпилька фиксирующая с короткой головкой NexGen 25 мм Ручка для пластины примерочной тиббальной PERSONA Пластина примерочная тиббальная для компонента цементируемого PERSONA (требуемый вариант) Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм Стержень выравнивающий с муфтой Извлекатель шпильки NexGen Позиционер опилочного блока PERSONA Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки (требуемый вариант) Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки (требуемый вариант)
Подготовка тиббального ложа (без применения удлиняющей ножки)	Определение размера и установка ротации тиббального компонента. Для кля тиббального имплантата каждого размера используется особое расположение; поэтому важно выбрать надлежащий размер компонента до начала сверления и установки. После осуществления этих последовательных этапов размер не должен измениться. При желании на этой стадии до начала сверления и установки в большеберцовую кость можно завершить подготовку бедренной кости, а также выполнить примерку компонентов. Такая последовательность действий позволит достичь необходимого диапазона движений и баланса мягких тканей.	Сверло тиббальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм Направитель сверла тиббального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм Пластина примерочная тиббальная для компонента цементируемого PERSONA (требуемый вариант) Ручка для пластины примерочной тиббальной PERSONA Ограничитель сверла тиббального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм Расширитель для компонента тиббального цементируемого PERSONA (требуемый вариант) Ручка инсертора/экстрактора расширителя тиббального PERSONA
Подготовка и резекция надколенника (если требуется)	Если хирург, оценив состояние надколенника пациента, признает его удовлетворительным, выполнять моделирование поверхности надколенника не потребуется. Выполнение резекции надколенника	Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм Штангенциркуль для бедренного компонента NexGen Направитель остеотомии надколенника NexGen Шаблон примерочный надколенника NexGen Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen (требуемый вариант) Защелка надколенника NexGen Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм
Завершение подготовки бедренной кости и примерка компонентов протеза	Извлеките любые задние остеофиты или свисания костной ткани на бедренной кости для обеспечения максимального сгибания колена. Примерка компонентов В случае установки бедренного компонента CR	Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм Молоток скользящий PERSONA Сверло бедренное NexGen, размер A,B Инсерт/Экстрактор бедренный PERSONA Прокладка импактора бедренного PERSONA CR Компонент примерочный бедренный PERSONA CR (требуемый вариант)

	В случае установки бедренного компонента PS Техника с использованием слейсера - Баланс сгибательных и разгибательных промежутков После резекции проксимальной части большеберцовой кости и дистальной части бедренной кости разгибательный промежуток можно оценить с помощью слейсеров или натяжителей.	Прокладка импактора бедренного PERSONA PS Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS (требуемый вариант) Компонент примерочный бедренный PERSONA PS (требуемый вариант) Блок опилочный PERSONA PS (требуемый вариант) Блок примерочный PERSONA PS (требуемый вариант) Блок примерочный MIS Quad-Spring (требуемый вариант) Стержень выравнивающий с муфтой Стержень выравнивающий
Примерка и установка компонентов эндопротеза	Извлекают любые задние остеофиты или сращения костной ткани на бедренной кости для обеспечения максимального сгибания колена. На этом этапе выполняют пробное вправление для проверки положения компонента, траектории движения надколенника, диапазона движения и стабильности сустава. Примерка бедренного компонента В случае установки бедренного компонента CR В случае установки бедренного компонента PS Примерка тибialного компонента Примерка протеза надколенника Сборка примерочного тибialного вкладыша (TASP) Примерочный тибialный вкладыш состоит из 3 частей: нижнего примерочного тибialного вкладыша, прокладки регулировочной вкладыша примерочного тибialного и верхнего тибialного вкладыша. Нижняя часть выбирается исходя из размера примерочного тибialного компонента. Верхняя часть выбирается исходя из применяемого бедренного компонента, его размера и выбранного нижнего примерочного	Ручка быстросъемная NexGen Пластина примерочная тибialная для компонента цементируемого PERSONA (требуемый вариант) Экстрактор ножи примерочной тибialной NexGen Ручка для пластины примерочной тибialной PERSONA Инсерт/Экстрактор бедренный PERSONA Прокладка импактора бедренного PERSONA CR Компонент примерочный бедренный PERSONA CR (требуемый вариант) Прокладка импактора бедренного PERSONA PS Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS (требуемый вариант) Компонент примерочный бедренный PERSONA PS (требуемый вариант) Блок примерочный PERSONA PS (требуемый вариант) Блок примерочный PERSONA PS-CPS (требуемый вариант) Экстрактор ножи примерочной тибialной NexGen Компонент примерочный тибialный цементируемый PERSONA 5 градусов (требуемый вариант) Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen (требуемый вариант) Защитный надколенника NexGen Ручка для пластины примерочной тибialной PERSONA Инсерт вкладыша тибialного PERSONA

	тибиального вкладыша. Нижние примерочные тибialные вкладыши выпускаются в двух вариантах толщины: +0 мм и +6 мм. Нижний вкладыш +0 мм используется для конструкций 10–14 мм, а нижний вкладыш +6 мм для конструкций 16–20 мм. При применении тибialного вкладыша CR	Вкладыш примерочный тибialный PERSONA CR верхний (требуемый вариант) Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибialного PERSONA (требуемый вариант) Вкладыш примерочный тибialный PERSONA нижний (требуемый вариант)
	При применении тибialного вкладыша UC	Вкладыш примерочный тибialный PERSONA UC верхний (требуемый вариант) Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибialного PERSONA (требуемый вариант) Вкладыш примерочный тибialный PERSONA нижний (требуемый вариант)
	При применении тибialного вкладыша MC	Вкладыш примерочный тибialный PERSONA MC верхний (требуемый вариант) Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибialного PERSONA (требуемый вариант) Вкладыш примерочный тибialный PERSONA нижний (требуемый вариант)
	При применении тибialного вкладыша PS	Вкладыш примерочный тибialный PERSONA PS верхний (требуемый вариант) Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибialного PERSONA (требуемый вариант) Вкладыш примерочный тибialный PERSONA нижний (требуемый вариант)
	При применении тибialного вкладыша CPS	Вкладыш примерочный тибialный PERSONA CPS верхний (требуемый вариант) Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибialного PERSONA ограниченного (требуемый вариант) Вкладыш примерочный тибialный PERSONA ограниченный нижний (требуемый вариант)
Установки удлиняющей ножки (если требуется)	Подбор размера и угла ротации тибialного компонента Подготовка отверстия в большеберцовой кости Сборка тибialного компонента и удлиняющей ножки	Сверло тибialное для ножки удлиняющей PERSONA (14х30мм), диаметр 15.7 мм Направитель сверла тибialного для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм Пластина примерочная тибialная для компонента цементируемого PERSONA (требуемый вариант) Ограничитель сверла тибialного для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм Рукоятка для пластины примерочной тибialной PERSONA Рашпиль для компонента тибialного цементируемого PERSONA (требуемый вариант) Рукоятка инсертора/экстрактора рашпиля тибialного PERSONA Экстрактор ножки примерочной тибialной NexGen Компонент примерочный тибialный цементируемый PERSONA 5 градусов (требуемый вариант) Ножка удлиняющая примерочная PERSONA, диаметр 14 мм, добавочная длина 30 мм Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA (требуемый вариант) Отвертка торсионная шестигранная NexGen 2.0 мм


		Рукоятка быстроразъемная NexGen
Ушивание раны	Обильное промывание раны выбранным раствором для извлечения нежелательных чужеродных частиц из суставной щели до ушивания раны. Дренаж может быть установлен интракапсулярно. Затем наложить на рану швы и замотать повязкой. Проверка на предмет того, что ретракторы не вызывают смещения тибialного плато особенно в заднелатеральном углу. До начала ушивания раны проверка полной посадки бедренного компонента. Проверка на предмет того, что четырехглавая мышца не защемлена бедренным компонентом.	

3. Описание медицинского изделия


3.1 ОПИСАНИЕ НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И КОМПОНЕНТОВ ПРИМЕРОЧНЫХ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОПРОТЕЗОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Ниже представлены изображения общего вида инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных и принадлежностей из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями. Изображения видов (возможно нестандартное расположение видов и количество) приведены для указания размеров и дают общее представление об инструментах хирургических, приспособлениях и компонентах примерочных и принадлежностей. В некоторых случаях с целью лучшего восприятия детальное изображение изделия и нанесенных символов нецелесообразно и приводится упрощенное изображение. При наличии правого (R) и левого (L) варианта исполнений допускается приводить изображение одного из вариантов исполнения как представительного. Для примерочных вкладышей с правым и левым исполнением изображение правого исполнения является зеркальным отображением левого исполнения. При наличии размерного ряда приводится, как правило, изображение одного из размеров изделия как представительного (детали конструкции и места нанесения символов на изделиях других размеров могут отличаться). Технические и функциональные характеристики, необходимые для безопасного применения изделия по назначению, установленному Производителем, содержатся в наименовании каждого изделия. Объем информации, содержащийся в наименовании медицинского изделия и в соответствующей инструкции по применению является достаточным для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно.

Ниже представлен чертеж хвостовика для вращающихся инструментов из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями, с указанием присоединительных размеров.

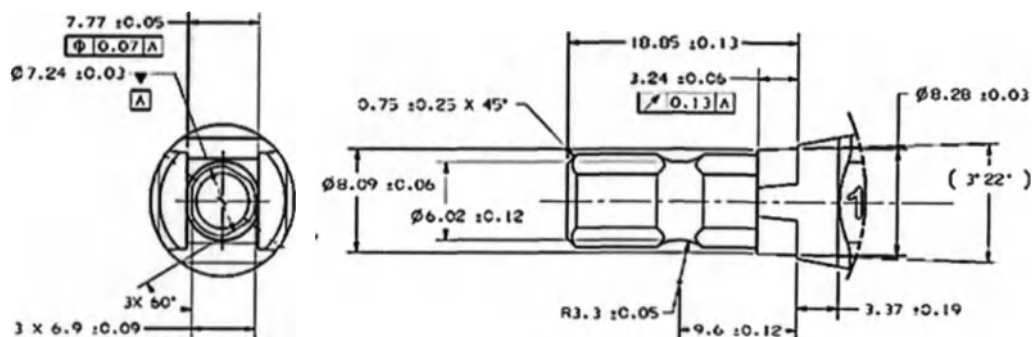


3.1.1 Сверло тибальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм

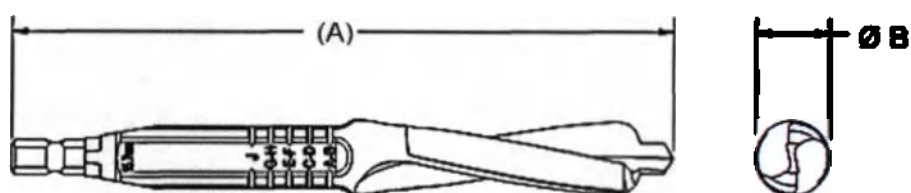

Параметр	A, мм ±1,5 мм	B, мм ±0,3 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Ради альное бие, мм	Масса, г
Сверло тибальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм	141,5	15,7	HRC 48-52	0,025-6,35	0,13	110±22

Сверло тибальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм применяется с хирургической дрелью.

3.1.2 Рукоятка для пластины примерочной тиббиальной PERSONA

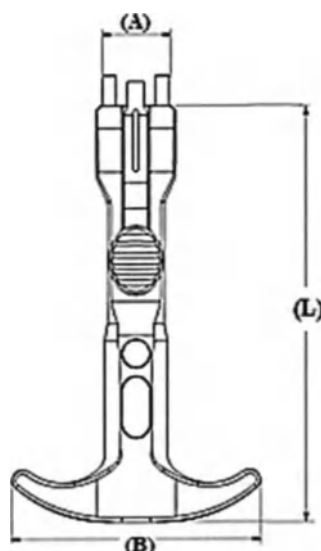


Параметр	L, мм ± 2 мм	B, мм ± 2 мм	A, мм ± 2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Рукоятка для пластины примерочной тибальной PERSONA	100	59	18	HRC 38-48	0,025-6,35	116±23

3.1.3 Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA

Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 4 градуса

Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 5 градусов


Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 6 градусов

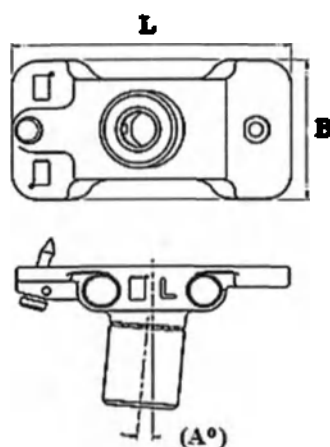

Направитель	Параметр, мм	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 2,5 мм	A, ° ± 2°	Твердость	Шероховатость поверхности	Масса, г
-------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	-----------	------------------------------	----------


вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA					Ra, мкм	
Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 4 градуса	63,5	31,5	4	HRC 38-50	0,025-6,35	95±23
Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 5 градусов	63,5	31,5	5	HRC 38-50	0,025-6,35	95±23
Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 6 градусов	63,5	31,5	6	HRC 38-50	0,025-6,35	95±23

3.1.4 Направитель опилочного блока фиксированный PERSONA

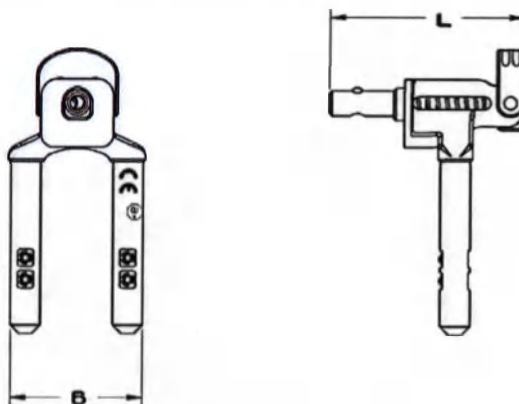

Параметр	B, мм ± 2,5 мм	L, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель опилочного блока фиксированный PERSONA					
Направитель опилочного блока фиксированный PERSONA	31,0	45,4	HRC 38-50	0,025-6,35	66±18

3.1.5 Направитель опилочного блока регулируемый PERSONA

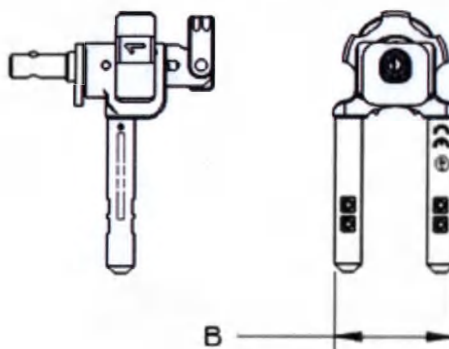

Параметр	B, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель опилочного блока регулируемый PERSONA				


Направитель опилочного блока регулируемый PERSONA	31,0	HRC 38-50	0,025-6,35	100±22
---	------	-----------	------------	--------

3.1.6 Стержень интрамедуллярный PERSONA 8 мм



Параметр	D, мм ± 0,7 мм	L, мм ± 3,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Стержень интрамедуллярный PERSONA 8 мм	8,0	430,5	HRC 38-45	0,025-6,35	145±30

3.1.7 Рукоятка модульная PERSONA

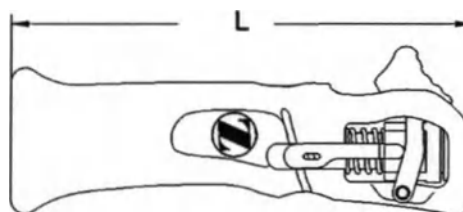

Параметр	L, мм ± 5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Рукоятка модульная PERSONA	127	HRC 38-50	0,025-6,35	325±65

3.1.8 Пластина резекционная дистальная PERSONA

Пластина резекционная дистальная PERSONA 1 мм

Пластина резекционная дистальная PERSONA 2 мм

Пластина резекционная дистальная PERSONA 3 мм

Пластина резекционная дистальная PERSONA 4 мм


Пластина резекционная дистальная PERSONA 5 мм

Пластина резекционная дистальная PERSONA 6 мм

Пластина резекционная дистальная PERSONA 7 мм


Пластина резекционная дистальная PERSONA 8 мм

Пластина резекционная дистальная PERSONA 9 мм

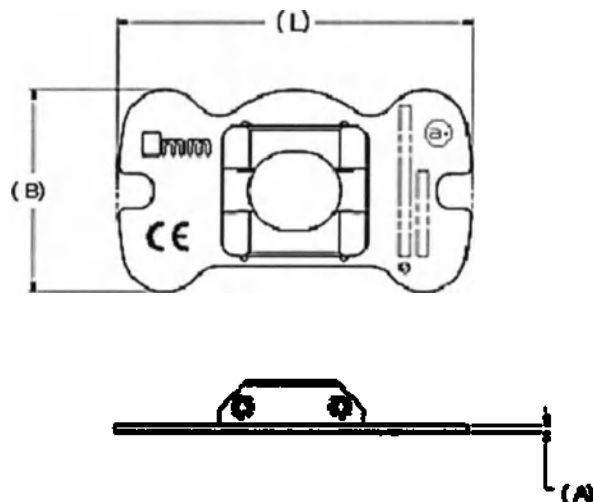


Параметр Пластина резекционная дистальная PERSONA	L, мм ± 2 мм	B, мм ± 1,5 мм	A, мм ± 0,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина резекционная дистальная PERSONA 1 мм	50	28,2	9,0	HRC 38-45	0,025-6,35	73±23
Пластина резекционная дистальная PERSONA 2 мм	50	28,2	8,0	HRC 38-45	0,025-6,35	66±22
Пластина резекционная дистальная PERSONA 3 мм	50	28,2	7,0	HRC 38-45	0,025-6,35	64±21
Пластина резекционная дистальная PERSONA 4 мм	50	28,2	6,0	HRC 38-45	0,025-6,35	57±18
Пластина резекционная дистальная PERSONA 5 мм	50	28,2	5,0	HRC 38-45	0,025-6,35	49±14
Пластина резекционная дистальная PERSONA 6 мм	50	28,2	4,0	HRC 38-45	0,025-6,35	41±12
Пластина резекционная дистальная PERSONA 7 мм	50	28,2	3,0	HRC 38-45	0,025-6,35	34±9
Пластина резекционная дистальная PERSONA 8 мм	50	28,2	2,0	HRC 38-45	0,025-6,35	20±8
Пластина резекционная дистальная PERSONA 9 мм	50	28,2	1,0	HRC 38-45	0,025-6,35	17±5

3.1.9 Молоток скользящий PERSONA

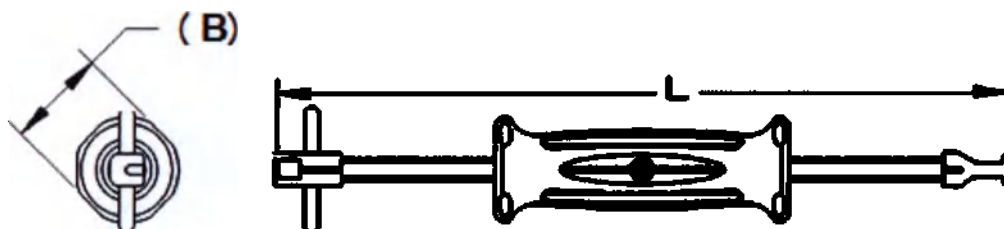


Параметр Молоток скользящий PERSONA	B, мм ± 2,5 мм	L, мм ± 5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Молоток скользящий PERSONA	42,5	318	HRC 38-48	0,025-6,35	700±140

3.1.10 Определитель размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки

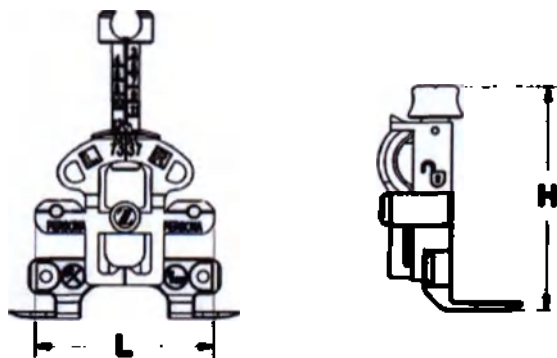

Параметр	H, мм (фактическое показание), ± 1,5 мм	L, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Определитель размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки	66,3	52,1	HRC 38-50	0,025-6,35	136±28

3.1.11 Штанга определителя размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки

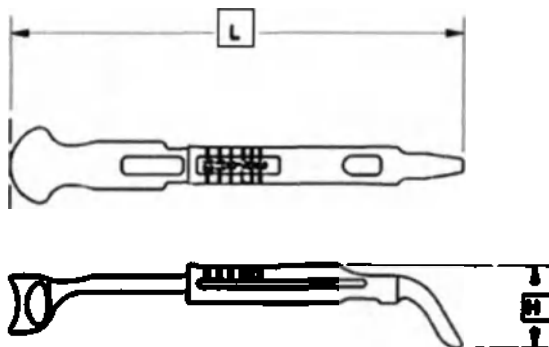

Параметр	H, мм ± 1,5 мм	L, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Штанга определителя размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки	19,4	109,6	HRC 38-47	0,025-6,35	45±9

3.1.12 Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 3

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 4

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 5

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 6

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 7


Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 8

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 9

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 10

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 11

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 12

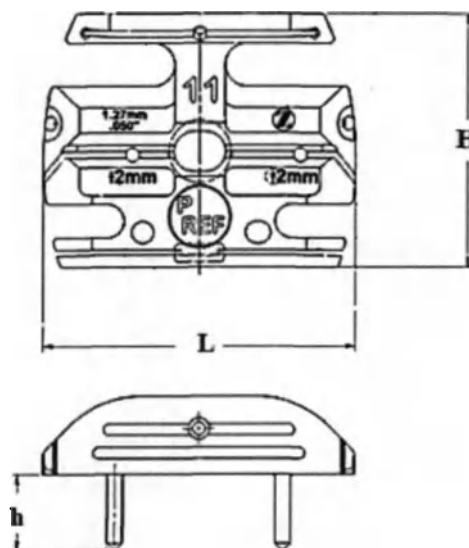

Параметр	L, мм ± 1,5 мм	H ^{+0,3} -0,7, мм	h ^{+0,3} -0,8, мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки						
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 3	60,5	44,0	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	181±36
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 4	62,2	46,0	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	181±36
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 5	64,0	47,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	202±40
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 6	66,8	49,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	210±42
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 7	67,5	51,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	230±46
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 8	69,3	53,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	246±49
Блок опилочный 4-в-1	71,0	55,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	261±52

Параметр	L, мм ± 1,5 мм	H ^{+0,5} -0,7 мм	h ^{+0,5} -0,8 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки						
PERSONA, задней ориентировки, размер 9						
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 10	72,8	57,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	280±56
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 11	74,5	59,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	297±59
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 12	75,5	63,8	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	323±65


3.1.13 Блок опилочный PERSONA PS

Блок опилочный PERSONA PS, размер 1-2

Блок опилочный PERSONA PS, размер 3-5


Блок опилочный PERSONA PS, размер 6-9

Блок опилочный PERSONA PS, размер 10-12

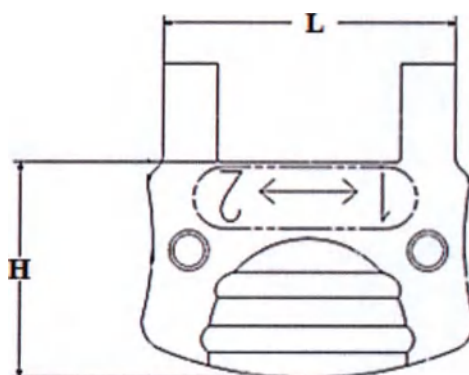

Параметр	L, мм ± 2 мм	H, мм ± 1 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный PERSONA PS					
Блок опилочный PERSONA PS, размер 1-2	30	22	HRC 38-47	0,025-6,35	38±8
Блок опилочный PERSONA PS, размер 3-5	33	22	HRC 38-47	0,025-6,35	41±8
Блок опилочный PERSONA PS, размер 6-9	34	22	HRC 38-47	0,025-6,35	38±8
Блок опилочный PERSONA PS, размер 10-12	37,5	22	HRC 38-47	0,025-6,35	41±8

3.1.14 Позicionер опилочного блока PERSONA

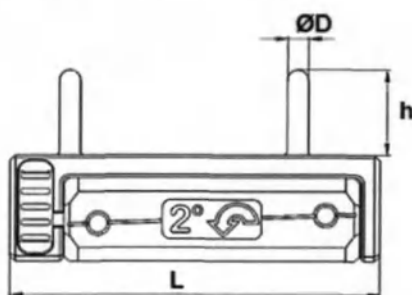

Параметр	L, мм ± 1,5 мм	h, мм ± 1,5 мм	D, мм ± 0,7 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Позicionер опилочного блока PERSONA	65,0	15,0	3,7	HRC 38-50	0,025-6,35	118±24

3.1.15 Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 1

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 2

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 3

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 4

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 5

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 6

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 7



Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 8

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 9

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 10

Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 11


Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 12

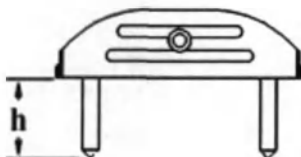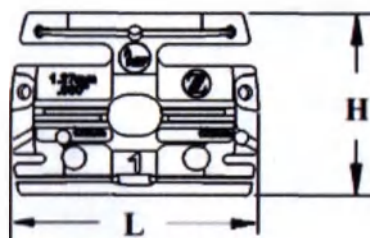

Параметр	L, мм ± 1,5 мм	H ^{+0,5} -0,7	h ^{+0,5} -0,8	Твердость	Шероховатость поверхности	Масса, г
Блок						

опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки		мм,	мм		Ra, мкм	
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 1	55,5	41	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	126±25
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 2	57	42,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	143±29
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 3	60,5	44	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	162±32
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 4	62,2	46	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	171±34
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 5	64	47,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	190±38
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 6	65,8	49,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	199±40
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 7	67,5	51,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	218±44
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 8	69,3	53,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	231±46
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 9	71	55,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	244±49
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 10	72,8	57,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	256±51
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 11	74,5	59,9	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	267±53
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 12	75,5	63,8	18,0	HRC 38-45	0,025-6,35	292±58


3.1.16 Определитель размера компонента бедренного PERSONA, передней ориентировки

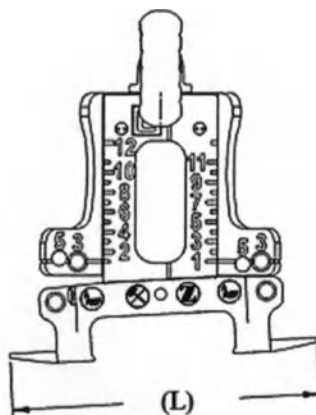

Параметр	L, мм ± 2 мм	Твердость (для металлических)	Шероховатость поверхности	Масса, г
----------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------	----------


Определитель размера компонента бедренного PERSONA, передней ориентировки		компонента)	Ra, мкм	
Определитель размера компонента бедренного PERSONA, передней ориентировки	67	HRC 38-50	0,025-8,35	227±45

3.1.17 Определитель размера компонента бедренного со штангой блокирующей PERSONA, передней ориентировки

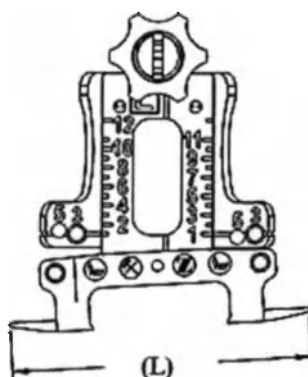

Определитель Размера компонента бедренного со штангой блокирующей PERSONA, передней ориентировки	Параметр	L, мм ± 2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Определитель размера компонента бедренного со штангой блокирующей PERSONA, передней ориентировки		67	HRC 38-52	0,025-8,35	217±43


3.1.18 Инserter/Экстрактор бедренный PERSONA

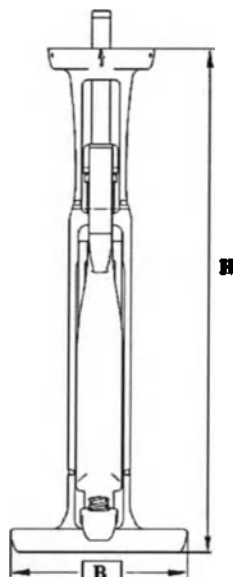

	H, мм	B, мм	Твердость	Шероховат	Масса, г	Усилие
--	-------	-------	-----------	-----------	----------	--------


Инсертер/Экстрактор бедренный PERSONA	Параметр	± 3 мм	± 2 мм		ость поверхнос- ти Ra, мкм		сведения бранш, Н
Инсертер/Экстрактор бедренный PERSONA		217	76,9	HRC 38-50	0,025-6,35	800 $\pm$ 160	max 1735

3.1.19 Прокладка импактора бедренного PERSONA PS

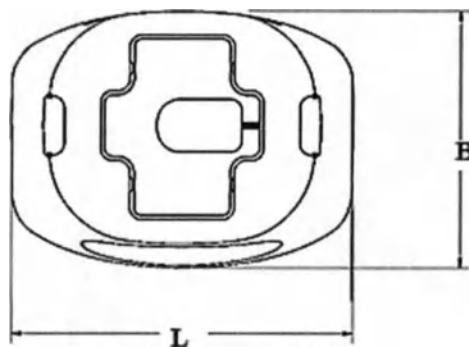


Прокладка импактора бедренного PERSONA PS	Параметр	L, мм $\pm 1,5$ мм	B, мм $\pm 1,5$ мм	Масса, г
Прокладка импактора бедренного PERSONA PS		58,2	44,0	49 $\pm$ 10

3.1.20 Прокладка импактора бедренного PERSONA CR

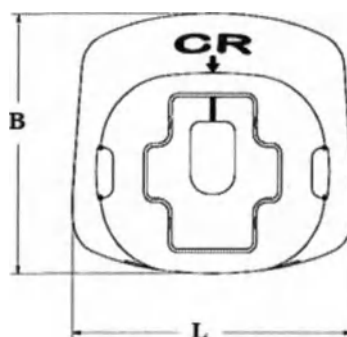


Прокладка импактора бедренного PERSONA CR	Параметр	L, мм $\pm 1,5$ мм	B, мм $\pm 1,5$ мм	Масса, г
Прокладка импактора бедренного PERSONA CR		56,5	52,0	58 $\pm$ 12

3.1.21 Инсертер вкладыша тиббиального PERSONA

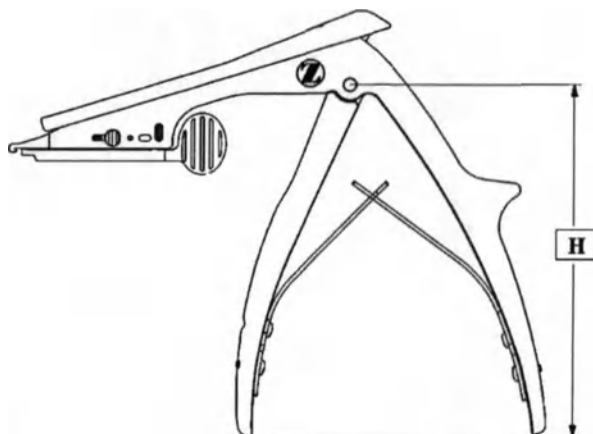


Параметр	H, мм ± 3 мм	A, мм ± 0,7 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г	Усилие сведения бранш, Н
Инсертер вкладыша тибиального PERSONA	149	6,9	HRC 38-52	0,025-6,35	500±100	max 1735

3.1.22 Направитель проксимальный PERSONA EM

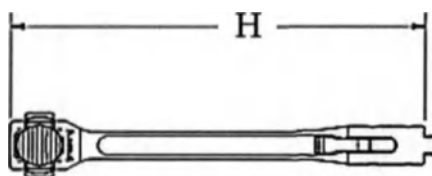


Параметр	H, мм ± 3,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель проксимальный PERSONA EM	196,5	HRC 38-52 HRC 23 max для стали Nitronic 60	0,025-6,35	230±46

3.1.23 Стержень дистальный PERSONA EM

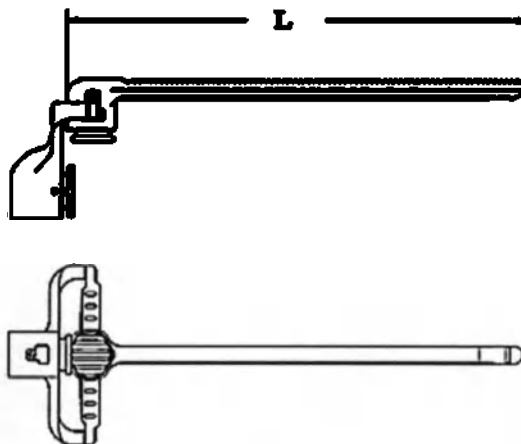


Параметр	L, мм $\pm 3,5$ мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Стержень дистальный PERSONA EM	184,5	HRC 38-52	0,025-6,35	186 $\pm$ 37

3.1.24 Струбина для лодыжки PERSONA EM

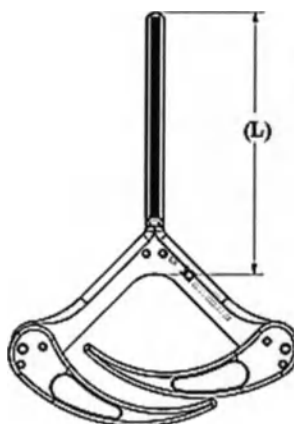


Параметр	L, мм ± 2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Струбина для лодыжки PERSONA EM	116	HRC 38-52	0,025-6,35	310 $\pm$ 62

3.1.25 Стилус тибialный PERSONA EM 2/10 мм

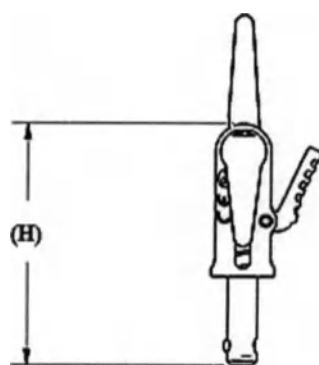


Параметр	H, мм ± 1,2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Стилус тибальный PERSONA EM 2/10 мм	48,3	HRC 38-52	0,025-6,35	56±11

3.1.26 Адаптер стержня PERSONA

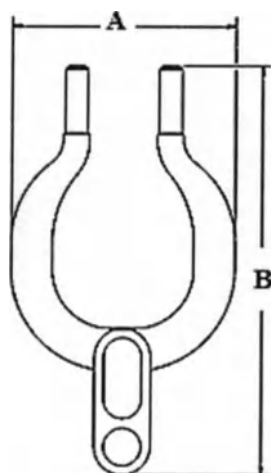


Параметр	A, мм ± 2 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Адаптер стержня PERSONA	38	68,8	HRC 38-45	0,025-6,35	48±10

3.1.27 Направитель вальгусный выравнивающий регулируемый бедренный PERSONA

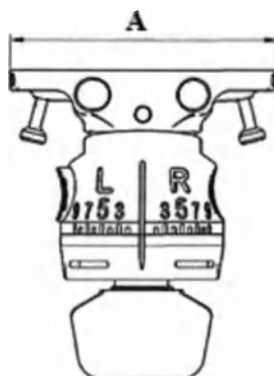

Направитель вальгусный выравнивающий регулируемый бедренный PERSONA	Параметр	A, мм $\pm 2,5$ мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель вальгусный выравнивающий регулируемый бедренный PERSONA		63,6	HRC 38-50	0,025-6,35	268 $\pm$ 55

3.1.28 Направитель сверла тибального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм

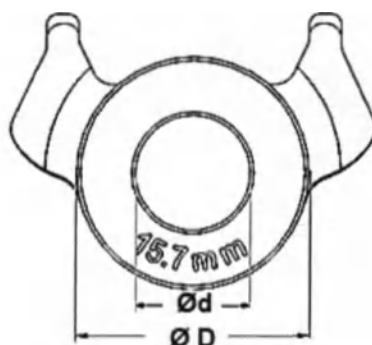

Направитель сверла тибального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм	Параметр	$d^{+0,7}_{-0,5}$, мм	D, мм ± 2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель сверла тибального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм		15,9	32	HRC 38-47	0,025-6,35	94 $\pm$ 20

3.1.29 Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA


Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер A-B

Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер C-D

Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер E-F


Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер G-H

Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер J

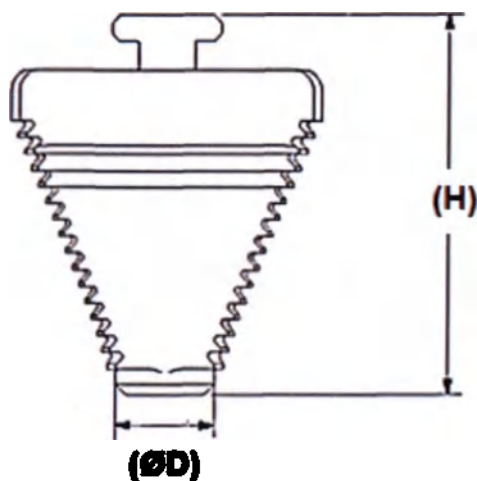

Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA	Параметр	D, мм ± 1,5 мм	H, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер A-B		14,4	42,0	HRC 38-45	0,025-6,35	85±18
Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер C-D		14,2	46,4	HRC 38-45	0,025-6,35	87±17
Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер E-F		14,2	50,7	HRC 38-45	0,025-6,35	96±19
Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер G-H		14,2	54,7	HRC 38-45	0,025-6,35	115±23
Рашпиль для компонента тибialьного цементируемого PERSONA, размер J		14,2	58,7	HRC 38-45	0,025-6,35	139±28

3.1.30 Рукоятка инсертора/экстрактора рашпиля тибального PERSONA

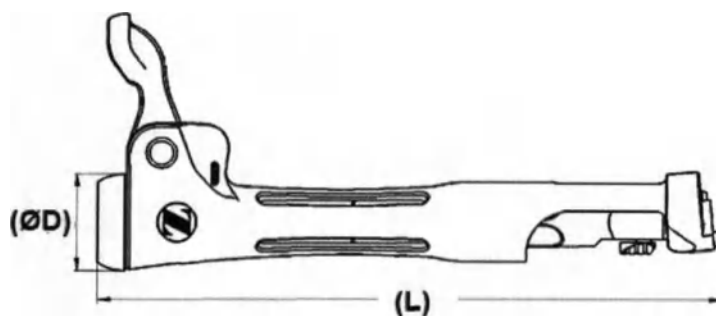


Параметр Рукоятка инсертора/экстрактора рашпиля тибального PERSONA	D, мм ± 1 мм	L, мм (в полном длине) ± 15 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Рукоятка инсертора/экстрактора рашпиля тибального PERSONA	33,2	215	HRC 38-52	0,025-6,35	700±140

3.1.31 Блок опилочный тибальный универсальный PERSONA

Блок опилочный тибальный универсальный PERSONA 3 градуса

Блок опилочный тибальный универсальный PERSONA 7 градусов

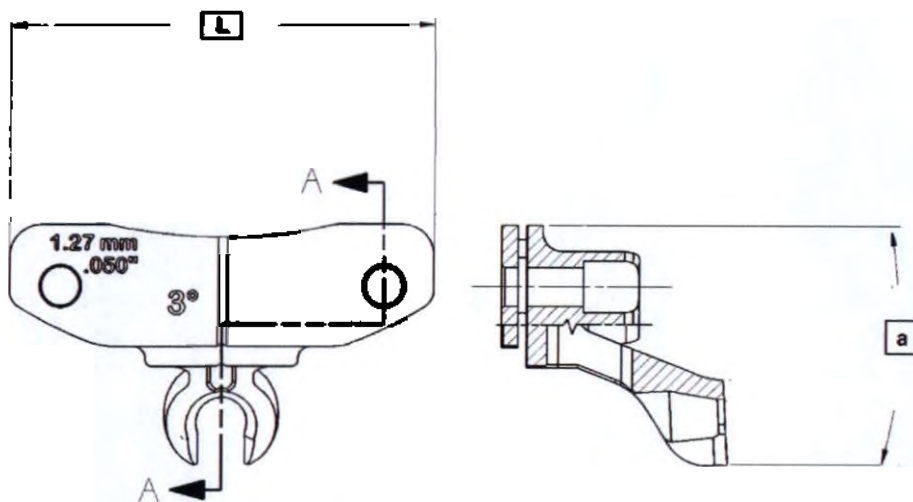


A - A


Параметр Блок опилочный тибальный универсальный PERSONA	L, мм ± 3 мм	а, град. ± 2 град.	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный тибальный универсальный PERSONA 3 градуса	67	3	HRC 38-45	0,025-6,35	100±20
Блок опилочный тибальный универсальный PERSONA 7 градусов	67	7	HRC 38-45	0,025-6,35	101±20

3.1.32 Блок опилочный тибальный PERSONA

Блок опилочный тибальный PERSONA левый 3 градуса
 Блок опилочный тибальный PERSONA левый 7 градусов
 Блок опилочный тибальный PERSONA правый 3 градуса
 Блок опилочный тибальный PERSONA правый 7 градусов

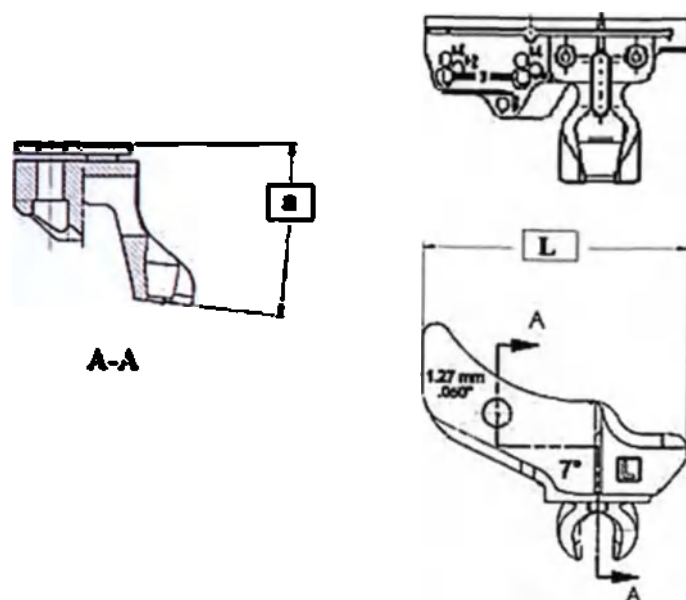

Параметр	L, мм ± 3 мм	а, град. ± 2 град.	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный тибальный PERSONA левый 3 градуса	60	3	HRC 38-45	0,025-6,35	100±20
Блок опилочный тибальный PERSONA левый 7 градусов	60	7	HRC 38-45	0,025-6,35	102±20

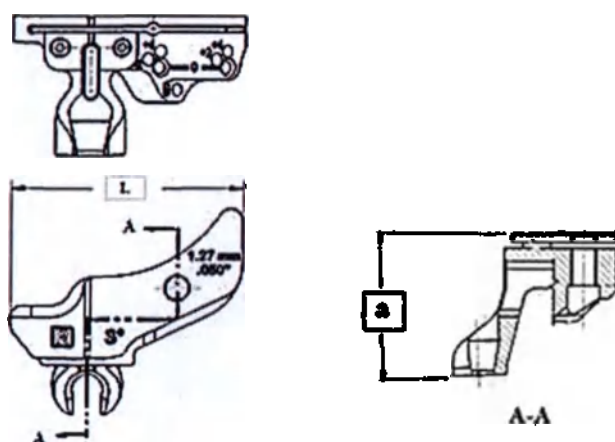

Параметр	L, мм ± 3 мм	а, град. ± 2 град.	Твердость	Шероховатость поверхности Ra,	Масса, г
----------	-----------------	-----------------------	-----------	----------------------------------	----------

Блок опилочный тибиальный PERSONA				мм	
Блок опилочный тибиальный PERSONA правый 3 градуса	60	3	HRC 38-45	0,025-6,35	100±20
Блок опилочный тибиальный PERSONA правый 7 градусов	60	7	HRC 38-45	0,025-6,35	102±20

3.1.33 Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер А

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер В

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер С

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер D

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер E

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер F

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер G

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер H

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер J

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер А

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер В

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер С

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер D


Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер E

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер F


Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер G

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер H

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер J

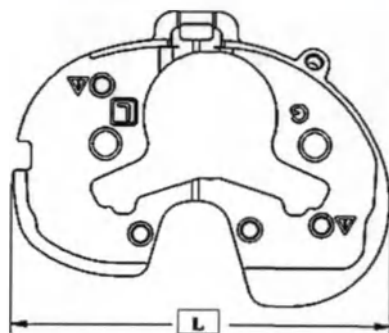

Параметр	L, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA				
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер A	57,7	HRC 38-47	0,025-6,35	30±7
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер B	60,7	HRC 38-47	0,025-6,35	38±8
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер C	63,7	HRC 38-47	0,025-6,35	38±8
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер D	67,0	HRC 38-47	0,025-6,35	48±10
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер E	70,8	HRC 38-47	0,025-6,35	55±11
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер F	75,1	HRC 38-47	0,025-6,35	68±14
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер G	79,0	HRC 38-47	0,025-6,35	72±14
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер H	83,0	HRC 38-47	0,025-6,35	88±18
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер J	88,1	HRC 38-47	0,025-6,35	93±19

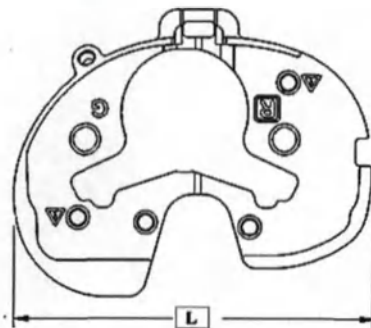


	L, мм	Твердость	Шероховатость	Масса, г
--	-------	-----------	---------------	----------

Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA	Параметр	$\pm 1,5$ мм		поверхности Ra, мкм	
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер A		57,7	HRC 38-47	0,025-6,35	30 $\pm$ 7
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер B		60,7	HRC 38-47	0,025-6,35	38 $\pm$ 8
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер C		63,7	HRC 38-47	0,025-6,35	38 $\pm$ 8
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер D		67,0	HRC 38-47	0,025-6,35	48 $\pm$ 10
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер E		70,8	HRC 38-47	0,025-6,35	55 $\pm$ 11
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер F		75,1	HRC 38-47	0,025-6,35	68 $\pm$ 14
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер G		79,0	HRC 38-47	0,025-6,35	72 $\pm$ 14
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер H		83,0	HRC 38-47	0,025-6,35	88 $\pm$ 18
Пластина примерочная тибальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер J		88,1	HRC 38-47	0,025-6,35	93 $\pm$ 19


3.1.34 Спейсер PERSONA FuZion

Спейсер PERSONA FuZion левый

Спейсер PERSONA FuZion правый

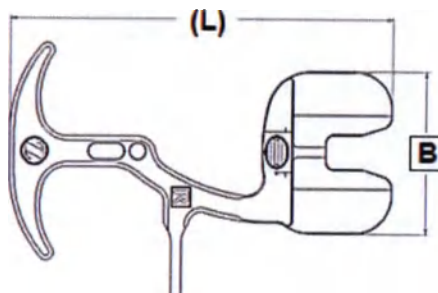


Параметр	L, мм $\pm 1,5$ мм	B, мм ± 1 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Спейсер PERSONA FuZion правый	154,5	64	HRC 38-52	0,025-6,35	292 $\pm$ 58

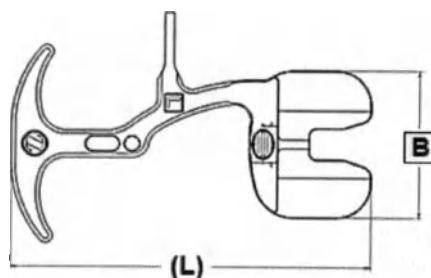

Параметр	L, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Спейсер PERSONA FuZion левый	154,5	64	HRC 38- 52	0,025-6,35	292±58



3.1.35 Пластина корректирующая PERSONA FuZion

Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 11 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 12 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 13 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 14 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 16 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 18 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 20 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 11 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 12 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 13 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 14 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 16 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 18 мм
 Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 20 мм

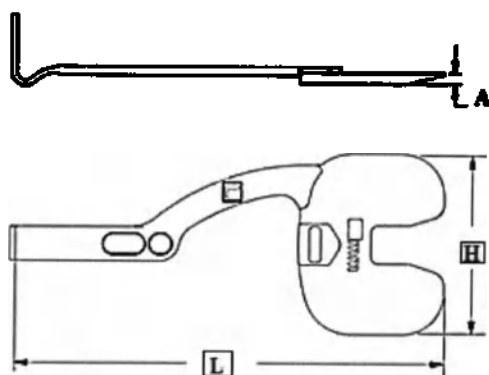

Параметр	L, мм ± 2,5 мм	H, мм ± 2 мм	A, мм ± 0,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая						
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 11 мм	154,5	64	1	HRC 38-47	0,025-6,35	54±12


Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 12 мм	154,5	64	2	HRC 38-47	0,025-6,35	73±15
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 13 мм	154,5	64	3	HRC 38-47	0,025-6,35	90±18
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 14 мм	154,5	64	4	HRC 38-47	0,025-6,35	107±21
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 16 мм	154,5	64	6	HRC 38-47	0,025-6,35	124±25
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 18 мм	154,5	64	8	HRC 38-47	0,025-6,35	155±31
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 20 мм	154,5	64	10	HRC 38-47	0,025-6,35	184±37

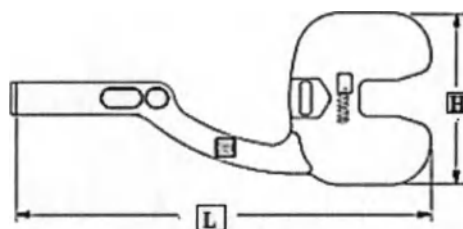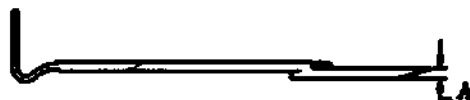

*

Параметр Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая	L, мм ± 2,5 мм	H, мм ± 1 мм	A, мм ± 0,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 11 мм	154,5	64	1	HRC 38-47	0,025-6,35	54±12
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 12 мм	154,5	64	2	HRC 38-47	0,025-6,35	73±15
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 13 мм	154,5	64	3	HRC 38-47	0,025-6,35	90±18
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 14 мм	154,5	64	4	HRC 38-47	0,025-6,35	107±21
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 16 мм	154,5	64	6	HRC 38-47	0,025-6,35	124±25
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 18 мм	154,5	64	8	HRC 38-47	0,025-6,35	155±31
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 20 мм	154,5	64	10	HRC 38-47	0,025-6,35	184±37


*для пластин размеров 16 мм, 18 мм и 20 мм на пластине имеются выемки

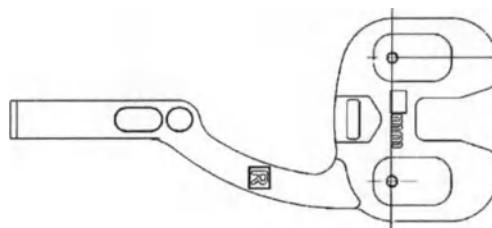


3.1.36 Натяжитель бедренный PERSONA FuZion

Натяжитель бедренный PERSONA FuZion левый

Натяжитель бедренный PERSONA FuZion правый

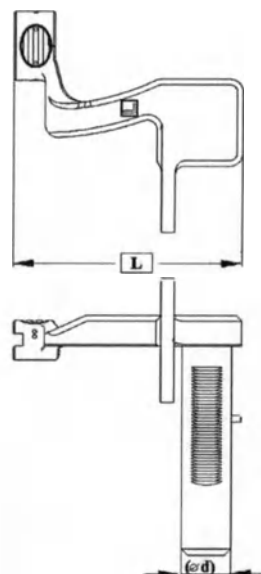

Параметр Натяжитель бедренный PERSONA FuZion	L, мм ± 2,5 мм	d, мм ± 2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Натяжитель бедренный PERSONA FuZion левый	69,5	15	HRC 38-52	0,025-6,35	175±35

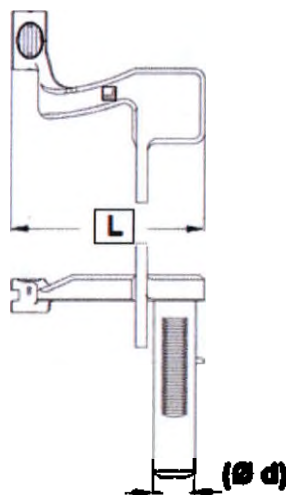


Параметр Натяжитель бедренный PERSONA FuZion	L, мм ± 2,5 мм	d, мм ± 2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Натяжитель бедренный PERSONA FuZion правый	69,5	15	HRC 38-52	0,025-6,35	175±35


3.1.37 Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion

Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion левый

Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion правый

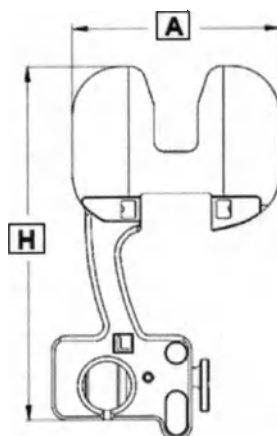

Параметр	A, мм ± 2 мм	H, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion левый	64	109,5	HRC 38-52	0,025-6,35	218±44

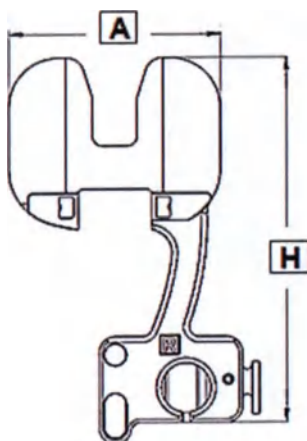


Параметр	A, мм ± 2 мм	H, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion правый	64	109,5	HRC 38-52	0,025-6,35	221±44


3.1.38 Пластина бедренная PERSONA FuZion +0 мм

Пластина бедренная PERSONA FuZion левая +0 мм

Пластина бедренная PERSONA FuZion правая +0 мм

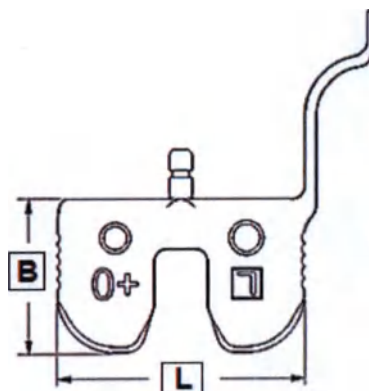


Параметр	L, мм ± 2 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина бедренная PERSONA FuZion +0 мм					
Пластина бедренная PERSONA FuZion левая +0 мм	64	39,5	HRC 38-47	0,025-6,35	60±12

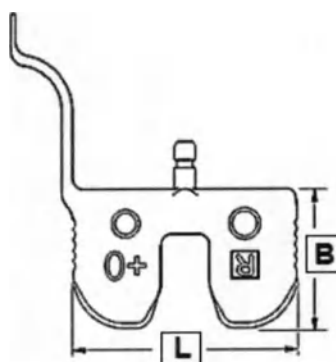

Параметр	L, мм ± 2 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина бедренная PERSONA FuZion +0 мм					
Пластина бедренная PERSONA FuZion правая +0 мм	64	39,5	HRC 38-47	0,025-6,35	60±12

3.1.39 Пластина бедренная PERSONA FuZion +9 мм

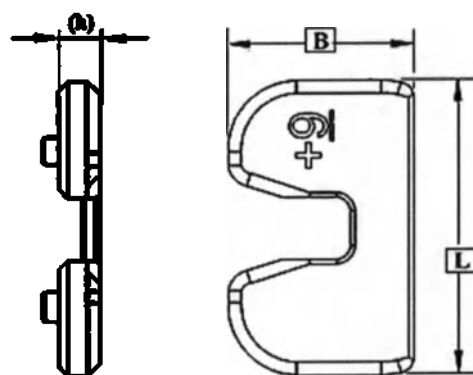


Параметр Пластина бедренная PERSONA FuZion +9 мм	L, мм ± 2 мм	B, мм ± 1,5 мм	h, мм ± 1 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Пластина бедренная PERSONA FuZion +9 мм	64	39,5	9	HRC 38-47	0,025-6,35	110±22


3.1.40 Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1

Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 левый

Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 правый

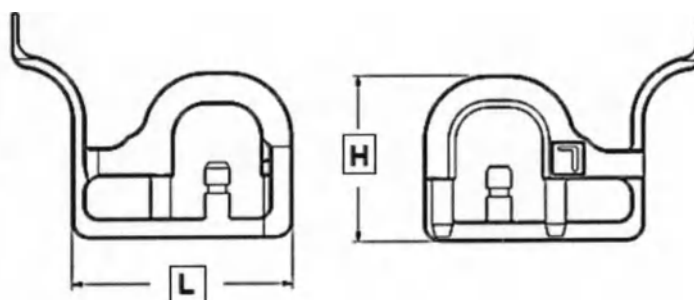


Параметр Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1	L, мм ± 1,8 мм	H, мм ± 1,8 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 левый	53,5	40,0	HRC 38-47	0,025-6,35	61±12

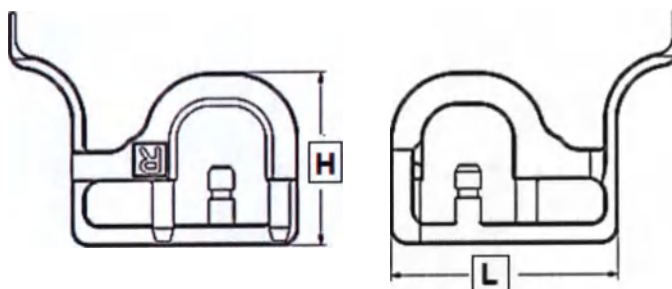


Параметр	L, мм ± 1,8 мм	H, мм ± 1,8 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1					
Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 правый	53,5	40,0	HRC 38-47	0,025-6,35	61±12

3.1.41 Направитель сверла PERSONA FuZion

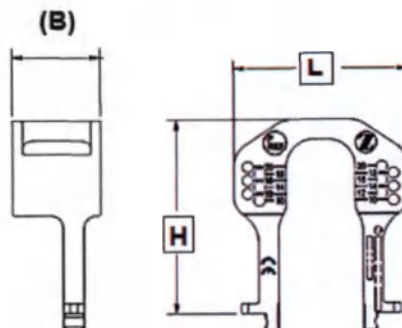

Параметр	L, мм ± 2 мм	H, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель сверла PERSONA FuZion						
Направитель сверла PERSONA FuZion	52	57,8	26,3	HRC 38-47	0,025-6,35	119±24

3.1.42 Стилус для определителя размера PERSONA FuZion, задней ориентировки

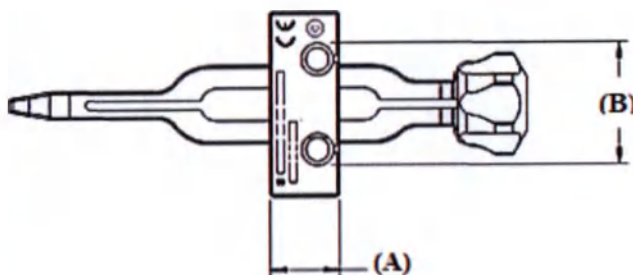


Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Стилус для определителя размера PERSONA FuZion, задней ориентировки					
Стилус для определителя размера PERSONA FuZion, задней ориентировки	15,2	26,5	HRC 38-52	0,025-6,35	98±20

3.1.43 Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion


Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, левый

Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion,

правый

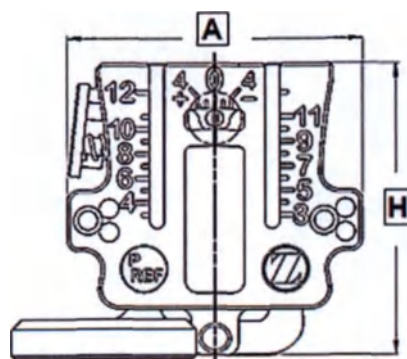

Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion	А, мм ± 2 мм	Н, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, левый	50	50,1	HRC 38-52	0,025-6,35	212±42

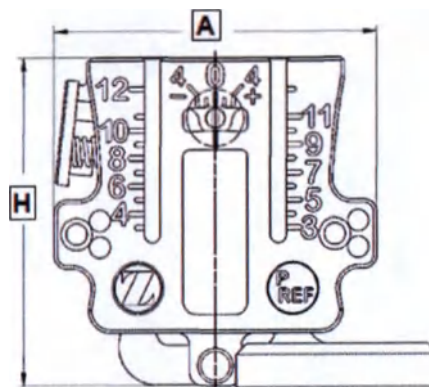

Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion	А, мм ± 2 мм	Н, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, правый	50	50,1	HRC 38-52	0,025-6,35	212±42

3.1.44 Блок примерочный PERSONA PS

Блок примерочный PERSONA PS узкий левый, размер 1-2

Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 3-5


Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 6-9

Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 10-12

Блок примерочный PERSONA PS узкий правый, размер 1-2

Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 3-5

Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 6-9
 Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 10-12


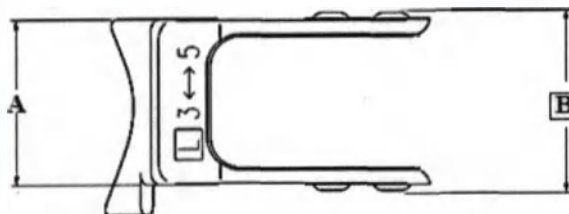


Параметр Блок примерочный PERSONA PS	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок примерочный PERSONA PS узкий левый, размер 1-2	18,5	19,9	HRC 40-45	0,025-6,35	16±5
Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 3-5	21,4	22,9	HRC 40-45	0,025-6,35	18±4
Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 6-9	22,5	24,2	HRC 40-45	0,025-6,35	19±4
Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 10-12	25,9	27,6	HRC 40-45	0,025-6,35	29±6
Блок примерочный PERSONA PS узкий правый, размер 1-2	18,5	19,9	HRC 40-45	0,025-6,35	16±5
Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 3-5	21,4	22,9	HRC 40-45	0,025-6,35	18±4
Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 6-9	22,5	24,2	HRC 40-45	0,025-6,35	19±4
Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 10-12	25,9	27,6	HRC 40-45	0,025-6,35	29±6

3.1.45 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS


Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 1
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 2
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 3
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 4
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 5
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 6
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 7
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 8
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 9
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 10
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 11
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 12
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 1
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 2
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 3
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 4
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 5
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 6
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 7
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 8

Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 9
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 10
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 11
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 12

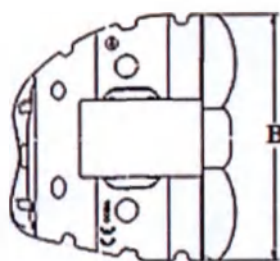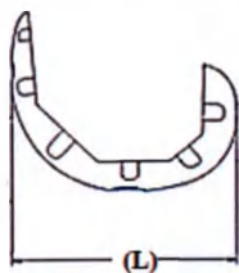


Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS					
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 3	54,1	62,5	HRC 40-45	0,025-6,35	167±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 4	56,5	64,3	HRC 40-45	0,025-6,35	182±37
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 5	58,4	66,0	HRC 40-45	0,025-6,35	193±39
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 6	60,2	67,8	HRC 40-45	0,025-6,35	215±43
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 7	62,8	69,5	HRC 40-45	0,025-6,35	234±48
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 8	64,8	71,3	HRC 40-45	0,025-6,35	254±52
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 9	67,0	73,0	HRC 40-45	0,025-6,35	267±56
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 10	69,2	74,8	HRC 40-45	0,025-6,35	277±57
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 11	71,6	76,5	HRC 40-45	0,025-6,35	300±65
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 3	54,1	62,5	HRC 40-45	0,025-6,35	164±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 4	56,5	64,3	HRC 40-45	0,025-6,35	182±37
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 5	58,4	66,0	HRC 40-45	0,025-6,35	193±39
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 6	60,2	67,8	HRC 40-45	0,025-6,35	215±43
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 7	62,8	69,5	HRC 40-45	0,025-6,35	234±48
Компонент примерочный бедренный	64,8	71,3	HRC 40-45	0,025-6,35	254±52

PERSONA PS правый, размер 8					
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 9	67,0	73,0	HRC 40-45	0,025-6,35	271±56
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 10	69,2	74,8	HRC 40-45	0,025-6,35	277±57
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 11	71,6	76,5	HRC 40-45	0,025-6,35	304±65

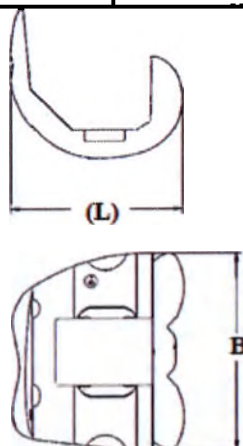


Компонент примерочный бедренный PERSONA PS	Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 1		48,7	55,5	HRC 40-45	0,025-6,35	143±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 2		51,0	57,0	HRC 40-45	0,025-6,35	154±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 1		48,7	55,5	HRC 40-45	0,025-6,35	143±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 2		51,0	57,0	HRC 40-45	0,025-6,35	154±35

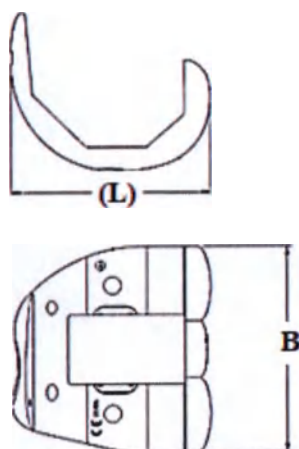


Компонент примерочный бедренный PERSONA PS	Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 12		75,8	77,5	HRC 40-45	0,025-6,35	334±72
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 12		75,8	77,5	HRC 40-45	0,025-6,35	341±72

3.1.46 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS


Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 1
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 2
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 3
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 4
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 5
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 6
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 7
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 8
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 9
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 10
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 11
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 12
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 1
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 2
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 3
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 4
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 5
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 6
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 7
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 8
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 9
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 10
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 11
 Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 12

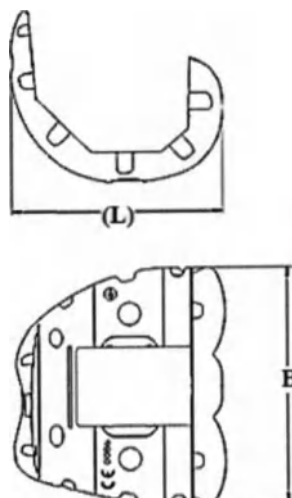

Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS					
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 3	54,1	62,5	HRC 40-45	0,025-6,35	163±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 4	56,5	64,3	HRC 40-45	0,025-6,35	176±38
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 5	58,4	66,0	HRC 40-45	0,025-6,35	191±40
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 6	60,2	67,8	HRC 40-45	0,025-6,35	216±43
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 7	62,8	69,5	HRC 40-45	0,025-6,35	232±48
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 8	64,8	71,3	HRC 40-45	0,025-6,35	247±51
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 9	67,0	73,0	HRC 40-45	0,025-6,35	266±55
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 10	69,2	74,8	HRC 40-45	0,025-6,35	276±57
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 11	71,6	76,5	HRC 40-45	0,025-6,35	300±60
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 3	54,1	62,5	HRC 40-45	0,025-6,35	165±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 4	56,5	64,3	HRC 40-45	0,025-6,35	179±38
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 5	58,4	66,0	HRC 40-45	0,025-6,35	191±40
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 6	60,3	67,8	HRC 40-45	0,025-6,35	216±43
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 7	62,8	69,5	HRC 40-45	0,025-6,35	232±48
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 8	64,8	71,3	HRC 40-45	0,025-6,35	250±51
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 9	67,0	73,0	HRC 40-45	0,025-6,35	267±55
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 10	69,2	74,8	HRC 40-45	0,025-6,35	276±57
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 11	71,5	76,5	HRC 40-45	0,025-6,35	300±60

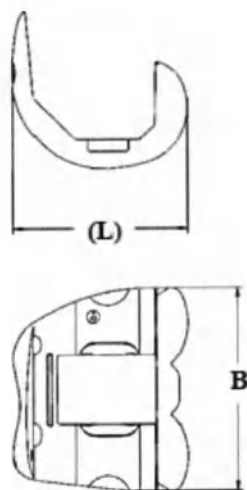

Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS	Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 1		48,7	55,5	HRC 40-45	0,025-6,35	141±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 2		51,0	57,0	HRC 40-45	0,025-6,35	150±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 1		48,7	55,5	HRC 40-45	0,025-6,35	141±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 2		51,0	57,0	HRC 40-45	0,025-6,35	150±35

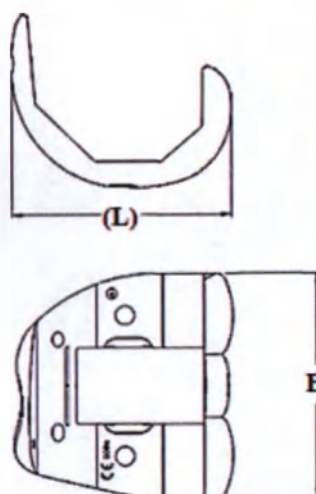


Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS	Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 12		75,8	77,5	HRC 40-45	0,025-6,35	331±70
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 12		75,9	77,5	HRC 40-45	0,025-6,35	337±70

3.1.47 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR


Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий левый, размер 1
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий левый, размер 2
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 3
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 4
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 5
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 6
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 7
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 8
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 9
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 10
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 11

Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 12
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий правый, размер 1
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий правый, размер 2
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 3
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 4
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 5
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 6
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 7
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 8
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 9
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 10
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 11
 Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 12

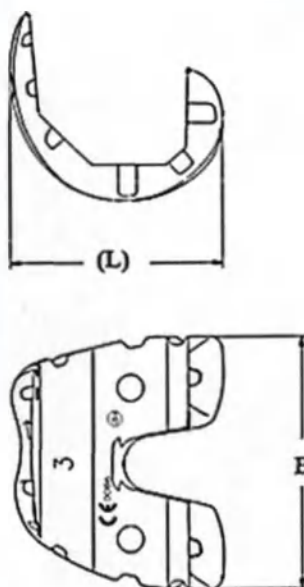


Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR					
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 3	53,2	62,5	HRC 40-45	0,025-6,35	163±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 4	55,6	64,3	HRC 40-45	0,025-6,35	177±37
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 5	57,1	66,0	HRC 40-45	0,025-6,35	189±39
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 6	59,6	67,8	HRC 40-45	0,025-6,35	214±45
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 7	62,1	69,5	HRC 40-45	0,025-6,35	236±49
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 8	63,8	71,3	HRC 40-45	0,025-6,35	251±50
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 9	66,2	73,0	HRC 40-45	0,025-6,35	267±55
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 10	68,5	74,8	HRC 40-45	0,025-6,35	285±57
Компонент примерочный бедренный	71,1	76,5	HRC 40-45	0,025-6,35	303±61

PERSONA CR левый, размер 11					
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 3	53,2	62,5	HRC 40-45	0,025-6,35	165±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 4	55,6	64,3	HRC 40-45	0,025-6,35	172±37
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 5	57,1	66,0	HRC 40-45	0,025-6,35	186±39
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 6	59,6	67,8	HRC 40-45	0,025-6,35	212±45
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 7	62,1	69,5	HRC 40-45	0,025-6,35	232±49
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 8	63,8	71,3	HRC 40-45	0,025-6,35	251±50
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 9	66,2	73,0	HRC 40-45	0,025-6,35	271±55
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 10	68,5	74,8	HRC 40-45	0,025-6,35	287±57
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 11	71,1	76,5	HRC 40-45	0,025-6,35	303±61

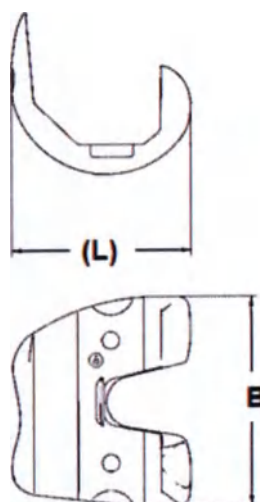

Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR					
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий левый, размер 1	47,9	55,5	HRC 40-45	0,025-6,35	134±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий левый, размер 2	50,7	57,0	HRC 40-45	0,025-6,35	137±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий правый, размер 1	47,9	55,5	HRC 40-45	0,025-6,35	134±35
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий правый, размер 2	50,7	57,0	HRC 40-45	0,025-6,35	137±35

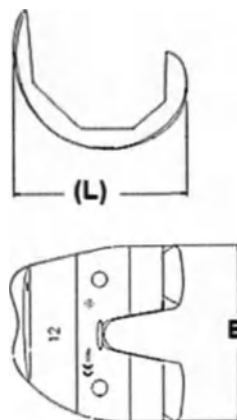

Параметр	L, мм ± 2,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR					
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 12	75,2	77,5	HRC 40-45	0,025-6,35	333±40
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 12	75,2	77,5	HRC 40-45	0,025-6,35	337±40

3.1.48 Блок примерочный PERSONA PS-CPS

Блок примерочный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 1-2

Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 3

Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 4-5

Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 6-7

Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 8-9

Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 10-11

Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 12

Блок примерочный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 1-2

Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 3


Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 4-5

Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 6-7

Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 8-9

Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 10-11

Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 12

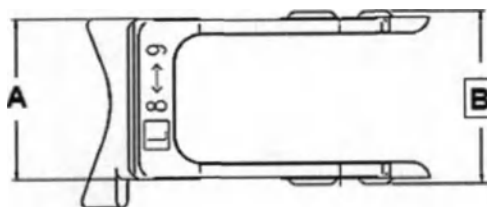

Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок примерочный PERSONA PS-CPS					

Блок примерочный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 1-2	18,5	19,9	HRC 40-45	0,025-6,35	20±8
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 3	21,4	22,9	HRC 40-45	0,025-6,35	20±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 4-5	21,4	22,9	HRC 40-45	0,025-6,35	18±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 6-7	22,5	24,2	HRC 40-45	0,025-6,35	20±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 8-9	22,5	24,2	HRC 40-45	0,025-6,35	21±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 10-11	25,9	27,6	HRC 40-45	0,025-6,35	29±6
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 12	25,9	27,6	HRC 40-45	0,025-6,35	32±6
Блок примерочный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 1-2	18,5	19,9	HRC 40-45	0,025-6,35	20±8
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 3	21,4	22,9	HRC 40-45	0,025-6,35	20±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 4-5	21,4	22,9	HRC 40-45	0,025-6,35	18±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 6-7	22,5	24,2	HRC 40-45	0,025-6,35	20±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 8-9	22,5	24,2	HRC 40-45	0,025-6,35	21±5
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 10-11	25,9	27,6	HRC 40-45	0,025-6,35	29±6
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 12	25,9	27,6	HRC 40-45	0,025-6,35	32±6

3.1.49 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA нижний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер AB (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер AB (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер CD (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер CD (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер EF (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер EF (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер GH (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер GH (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер J (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер J (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер AB (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер AB (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер CD (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер CD (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер EF (нижний +0 мм)


Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер EF (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер GH (нижний +0 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер GH (нижний +6 мм)

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер J (нижний +0 мм)


Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер J (нижний +6 мм)

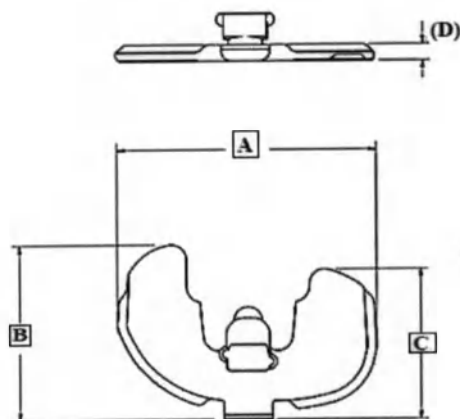

Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1,5 мм	C, мм ± 1,5 мм	D ^{+0,5} _{-0,3} мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA нижний					
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер АВ (нижний +0 мм)	53,5	36,7	31,5	3,4	6±2
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер АВ (нижний +6 мм)	53,5	36,7	31,5	9,4	14±5
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер CD (нижний +0 мм)	59,2	39,0	36,2	3,4	7±2
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер CD (нижний +6 мм)	59,2	39,0	36,2	9,4	18±4
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер EF (нижний +0 мм)	66,0	43,7	41,0	3,4	9±2
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер EF (нижний +6 мм)	66,0	43,7	41,0	9,4	23±5
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер GH (нижний +0 мм)	73,2	48,0	47,1	3,4	11±3
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер GH (нижний +6 мм)	73,2	48,0	47,1	9,4	28±6
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер J (нижний +0 мм)	81,6	53,9	53,5	3,4	14±4
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA левый, размер J (нижний +6 мм)	81,6	53,9	53,5	9,4	36±7
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер АВ (нижний +0 мм)	53,5	36,7	31,5	3,4	6±2
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер АВ (нижний +6 мм)	53,5	36,7	31,5	9,4	14±5
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер CD (нижний +0 мм)	59,2	39,0	36,2	3,4	7±2
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер CD (нижний +6 мм)	59,2	39,0	36,2	9,4	18±4
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер EF (нижний +0 мм)	66,0	43,7	41,0	3,4	9±2
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер EF (нижний +6 мм)	66,0	43,7	41,0	9,4	23±5
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер GH (нижний +0 мм)	73,2	48,0	47,1	3,4	11±3
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер GH (нижний +6 мм)	73,2	48,0	47,1	9,4	28±6
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер J (нижний +0 мм)	81,6	53,9	53,5	3,4	14±4
Вкладыш примерочный тибиаьный PERSONA правый, размер J (нижний +6 мм)	81,6	53,9	53,5	9,4	36±7

3.1.50 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный нижний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер AB (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер AB (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер CD (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер CD (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер EF (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер EF (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер GH (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер GH (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер J (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер J (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер CD (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер CD (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер EF (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер EF (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер GH (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер GH (нижний +6 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер J (нижний +0 мм)
 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер J (нижний +6 мм)

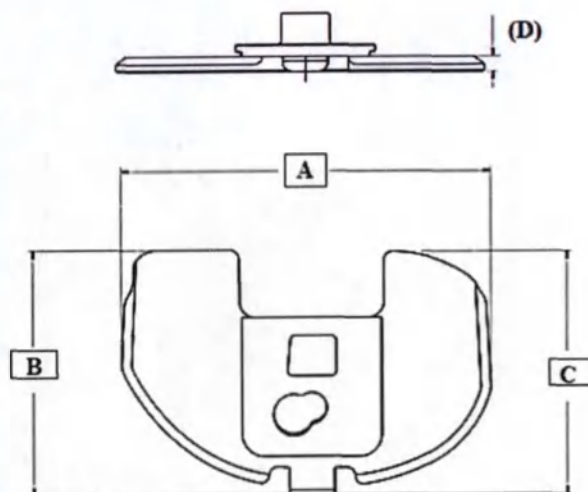

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный нижний	Параметр	A, мм $\pm 1,5$ мм	B, мм $\pm 1,5$ мм	C, мм $\pm 1,5$ мм	$D^{+0,5}_{-0,3}$ мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер AB (нижний +0 мм)		53,5	36,7	31,4	3,4	5 $\pm$ 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер AB (нижний +6 мм)		53,5	36,7	31,4	9,4	16 $\pm$ 5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер CD (нижний +0 мм)		59,2	38,8	36,0	3,4	7 $\pm$ 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер CD (нижний +6 мм)		59,2	38,8	36,0	9,4	19 $\pm$ 4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +0 мм)		66,0	43,5	40,8	3,4	9 $\pm$ 2

ограниченный левый, размер EF (нижний +0 мм)					
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный левый, размер EF (нижний +6 мм)	66,0	43,5	40,8	9,4	24±5
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный левый, размер GH (нижний +0 мм)	73,2	47,8	46,9	3,4	12±3
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный левый, размер GH (нижний +6 мм)	73,2	47,8	46,9	9,4	31±6
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный левый, размер J (нижний +0 мм)	81,7	53,7	53,3	3,4	15±3
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный левый, размер J (нижний +6 мм)	81,7	53,7	53,3	9,4	39±8
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +0 мм)	53,5	36,7	31,4	3,4	5±2
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +6 мм)	53,5	36,7	31,4	9,4	16±5
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер CD (нижний +0 мм)	59,2	38,8	36,0	3,4	7±2
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер CD (нижний +6 мм)	59,2	38,8	36,0	9,4	19±4
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер EF (нижний +0 мм)	66,0	43,5	40,8	3,4	9±2
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер EF (нижний +6 мм)	66,0	43,5	40,8	9,4	24±5
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер GH (нижний +0 мм)	73,2	47,8	46,9	3,4	12±3
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер GH (нижний +6 мм)	73,2	47,8	46,9	9,4	31±6
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер J (нижний +0 мм)	81,7	53,7	53,3	3,4	15±3
Вкладыш примерочный тибальный PERSONA ограниченный правый, размер J (нижний +6 мм)	81,7	53,7	53,3	9,4	39±8

3.1.51 Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 1-2/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 3-6/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 1-2/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 3-9/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 3-11/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 7-12/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR левый, размер 9-12/J, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 1-2/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 3-6/AB, верхний


Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 1-2/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 3-9/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 3-11/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 7-12/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибальный PERSONA CR правый, размер 9-12/J, верхний

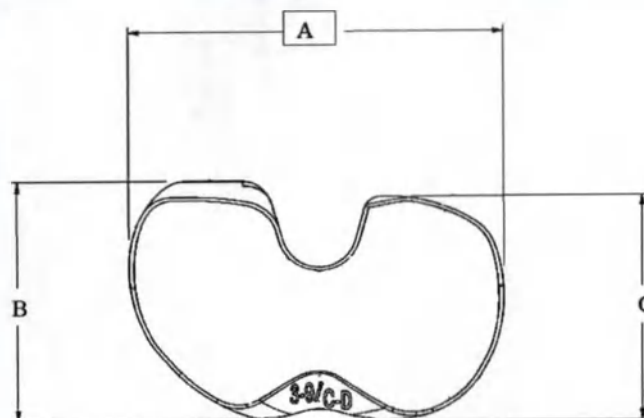

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR верхний	А, мм ± 1,5 мм	В, мм ± 1,3 мм	С, мм ± 1,3 мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,8	34,3	8±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-6/AB, верхний	57,3	38,9	34,4	9±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	40,3	38,1	9±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-9/CD, верхний	63,4	40,8	38,5	11±2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-11/EF, верхний	70,6	45,8	43,2	14±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 7-12/GH, верхний	78,6	49,6	49,1	18±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 9-12/J, верхний	87,7	55,6	55,5	24±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,8	34,3	8±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-6/AB, верхний	57,3	38,9	34,4	9±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	40,3	38,1	9±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-9/CD, верхний	63,4	40,8	38,5	11±2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-11/EF, верхний	70,6	45,8	43,2	14±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 7-12/GH, верхний	78,6	49,6	49,1	18±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 9-12/J, верхний	87,7	55,6	55,5	24±5

3.1.52 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-4/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/CD, верхний


Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-7/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 4-11/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 7-12/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 9-12/J, верхний


Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 3-4/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 3-7/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 4-11/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 7-12/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 9-12/J, верхний

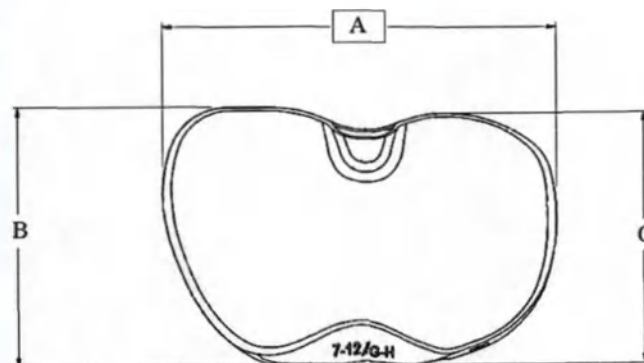

Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1,3 мм	C, мм ± 1,3 мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC верхний				
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,8	34,6	10±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-4/AB, верхний	57,3	39,0	34,7	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	42,2	38,9	14±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-7/CD, верхний	63,4	41,9	39,0	15±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 4-11/EF, верхний	70,6	46,2	43,7	19±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 7-12/GH, верхний	78,6	51,1	49,6	26±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 9-12/J, верхний	87,7	56,9	56,0	34±7
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,8	34,6	10±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 3-4/AB, верхний	57,3	39,0	34,7	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	42,2	38,9	14±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 3-7/CD, верхний	63,4	41,9	39,0	15±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 4-11/EF, верхний	70,6	46,2	43,7	19±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 7-12/GH, верхний	78,6	51,1	49,6	26±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 9-12/J, верхний	87,7	56,9	56,0	34±7

3.1.53 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 1-2/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 3-4/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 4-5/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 6-7/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-9/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 4-5/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 6-7/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-11/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-11/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 12/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 12/J, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 1-2/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 3-4/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 4-5/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 6-7/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-9/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 4-5/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 6-7/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-11/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-11/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 12/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 12/J, верхний

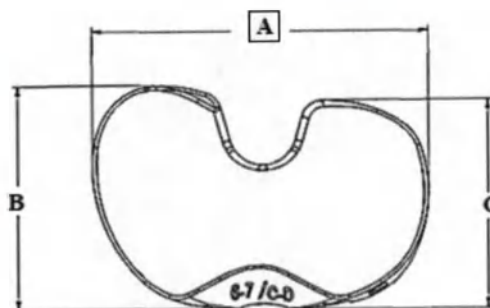


Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1,3 мм	C, мм ± 1,3 мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC верхний				
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,6	34,5	10±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 3-4/AB, верхний	57,3	38,7	34,5	12±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 4-5/CD, верхний	63,4	41,6	38,9	14±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 6-7/CD, верхний	63,4	41,9	39,0	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-9/CD, верхний	63,5	42,0	39,0	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 4-5/EF, верхний	70,6	46,1	43,9	19±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 6-7/EF, верхний	70,6	46,2	43,7	18±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC	70,6	46,4	43,9	17±4

левый, размер 8-11/EF, верхний				
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-11/GH, верхний	78,6	50,8	49,4	23±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 12/GH, верхний	78,6	50,7	49,4	23±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 12/J, верхний	87,7	56,8	55,8	30±6
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,6	34,5	10±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 3-4/AB, верхний	57,3	38,7	34,5	12±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 4-5/CD, верхний	63,4	41,6	38,9	14±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 6-7/CD, верхний	63,4	41,9	39,0	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-9/CD, верхний	63,5	42,0	39,0	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 4-5/EF, верхний	70,6	46,1	43,9	19±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 6-7/EF, верхний	70,6	46,2	43,7	18±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-11/EF, верхний	70,6	46,4	43,9	17±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-11/GH, верхний	78,6	50,8	49,4	23±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 12/GH, верхний	78,6	50,7	49,4	23±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 12/J, верхний	87,7	56,8	55,8	30±6

3.1.54 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 1-2/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 1-2/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 10-11/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 10-12/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 10-12/J, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 1-2/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/AB, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 1-2/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/CD, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 10-11/EF, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 10-12/GH, верхний
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 10-12/J, верхний

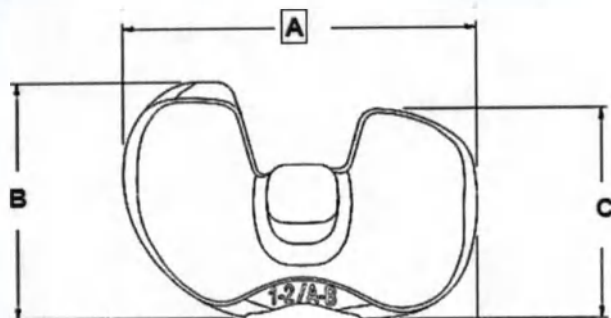

Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1,3 мм	C, мм ± 1,3 мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS верхний				
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,4	34,3	10±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/AB, верхний	57,3	38,5	34,2	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	40,3	38,2	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/CD, верхний	63,4	40,9	38,3	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/CD, верхний	63,4	40,7	38,3	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/EF, верхний	70,6	44,8	43,5	17±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/EF, верхний	70,6	44,9	43,6	16±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 10-11/EF, верхний	70,6	45,1	43,5	18±4
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/GH, верхний	78,6	51,0	49,0	22±4
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 10-12/GH, верхний	78,6	50,9	49,2	24±5
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS левый, размер 10-12/J, верхний	87,7	57,6	55,5	32±6
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,4	34,3	10±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/AB, верхний	57,3	38,5	34,2	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	40,3	38,2	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/CD, верхний	63,4	40,9	38,3	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/CD, верхний	63,4	40,7	38,3	13±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/EF, верхний	70,6	44,8	43,5	17±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/EF, верхний	70,6	44,9	43,6	16±3
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 10-11/EF, верхний	70,6	45,1	43,5	18±4
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/GH, верхний	78,6	51,0	49,0	22±4
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 10-12/GH, верхний	78,6	50,9	49,2	24±5
Вкладыш примерочный тиббиальный PERSONA PS правый, размер 10-12/J, верхний	87,7	57,6	55,5	32±6

3.1.55 Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 1-2/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 1-2/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-8/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-8/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-11/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-8/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-12/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-12/J, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 1-2/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/AB, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 1-2/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-8/CD, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/EF, верхний


Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-8/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-11/EF, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-8/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-12/GH, верхний

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-12/J, верхний

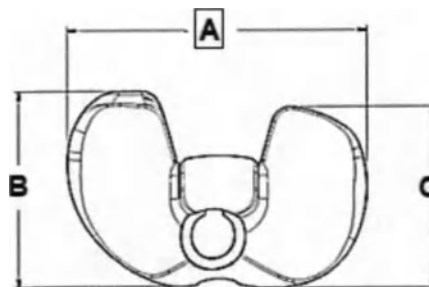

Параметр	A, мм ± 1,5 мм	B, мм ± 1,3 мм	C, мм ± 1,3 мм	Масса, г
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS верхний				
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,5	34,5	11±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/AB, верхний	57,3	38,5	34,3	12±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	40,6	38,4	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/CD, верхний	63,4	41,3	38,3	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-8/CD, верхний	63,4	41,4	38,5	12±2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/EF, верхний	70,6	45,1	43,6	17±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-8/EF, верхний	70,6	45,4	43,7	16±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-11/EF, верхний	70,6	45,3	43,1	18±4

Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-9/GH, верхний	78,6	51,3	49,3	22±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-12/GH, верхний	78,6	51,1	49,2	23±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-12/J, верхний	87,7	57,8	55,6	32±6
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 1-2/AB, верхний	57,3	38,5	34,5	11±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/AB, верхний	57,3	38,5	34,3	12±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 1-2/CD, верхний	63,4	40,6	38,4	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/CD, верхний	63,4	41,3	38,3	13±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-9/CD, верхний	63,4	41,4	38,5	12±2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/EF, верхний	70,6	45,1	43,6	17±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-9/EF, верхний	70,6	45,4	43,7	16±3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-11/EF, верхний	70,6	45,3	43,1	18±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-9/GH, верхний	78,6	51,3	49,3	22±4
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-12/GH, верхний	78,6	51,1	49,2	23±5
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-12/J, верхний	87,7	57,8	55,6	32±6

3.1.66 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB
толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB
толщина 11 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB
толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB
толщина 13 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB
толщина 14 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер CD
толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер CD
толщина 11 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер CD
толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер CD
толщина 13 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер CD
толщина 14 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер EF
толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер EF
толщина 11 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер EF
толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер EF

толщина 13 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер EF
толщина 14 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH
толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH
толщина 11 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH
толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH
толщина 13 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH
толщина 14 мм


Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J
толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J
толщина 11 мм


Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J
толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J
толщина 13 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J
толщина 14 мм

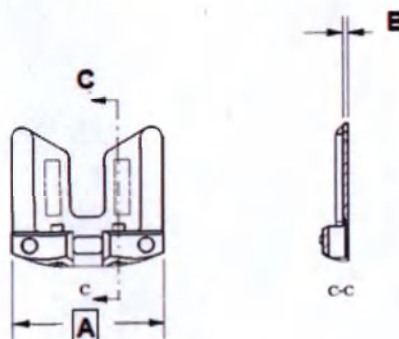

Параметр	$A_{+0,7}^{+0,7}$, мм	$B_{-0,7}^{+0,5}$, мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA					
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер AB толщина 10 мм	28,9	1	HRC 30-38	0,025-6,35	7±2
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер CD толщина 10 мм	31,1	1	HRC 30-38	0,025-6,35	12±3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер EF толщина 10 мм	31,1	1	HRC 30-38	0,025-6,35	13±3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH толщина 10 мм	31,1	1	HRC 30-38	0,025-6,35	12±3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J толщина 10 мм	33,3	1	HRC 30-38	0,025-6,35	15±3

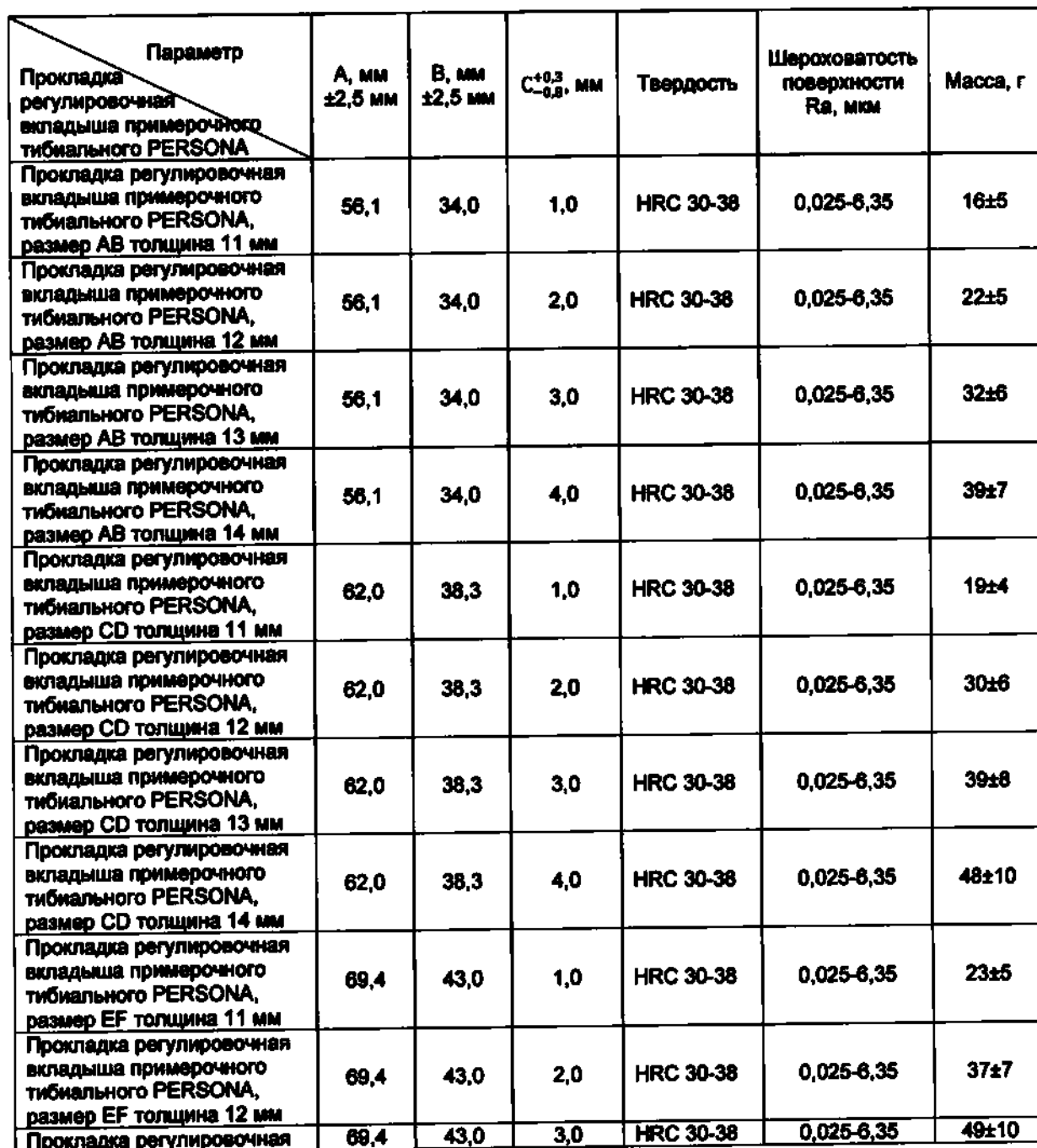

вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер EF толщина 13 мм						
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер EF толщина 14 мм	69,4	43,0	4,0	HRC 30-38	0,025-6,35	61±12
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH толщина 11 мм	76,2	49,3	1,0	HRC 30-38	0,025-6,35	28±6
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH толщина 12 мм	76,2	49,3	2,0	HRC 30-38	0,025-6,35	40±9
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH толщина 13 мм	76,2	49,3	3,0	HRC 30-38	0,025-6,35	62±12
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер GH толщина 14 мм	76,2	49,3	4,0	HRC 30-38	0,025-6,35	78±16

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J толщина 11 мм	84,3	55,5	1,0	HRC 30-38	0,025-6,35	35±7
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J толщина 12 мм	84,3	55,5	2,0	HRC 30-38	0,025-6,35	59±12
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J толщина 13 мм	84,3	55,5	3,0	HRC 30-38	0,025-6,35	79±16
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA, размер J толщина 14 мм	84,3	55,5	4,0	HRC 30-38	0,025-6,35	100±20

3.1.57 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер AB толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер AB толщина 11 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер AB толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер AB толщина 13 мм


Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер AB толщина 14 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 10 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 11 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 12 мм

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер CD толщина 13 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер CD толщина 14 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер EF толщина 10 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер EF толщина 11 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер EF толщина 12 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер EF толщина 13 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер EF толщина 14 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер GH толщина 10 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер GH толщина 11 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер GH толщина 12 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер GH толщина 13 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер GH толщина 14 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер J толщина 10 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер J толщина 11 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер J толщина 12 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер J толщина 13 мм
 Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного, размер J толщина 14 мм

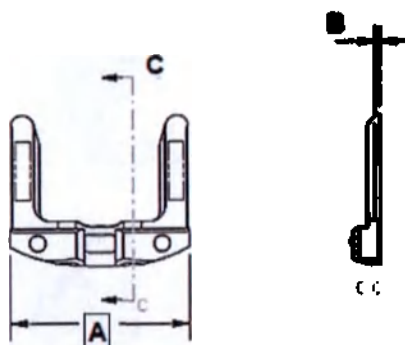

Параметр Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA ограниченного	$A_{+0.7, -0.5}^{\text{мм}}$	$B_{+0.5, -0.7}^{\text{мм}}$	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибияльного PERSONA	31,9	1	HRC 30-47	0,025-6,35	7±3

Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 13 мм	62,0	38,3	3,0	HRC 30-47	0,025-6,35	37±10
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 14 мм	62,0	38,3	4,0	HRC 30-47	0,025-6,35	44±12
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 11 мм	69,4	43,0	1,0	HRC 30-47	0,025-6,35	31±9
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 12 мм	69,4	43,0	2,0	HRC 30-47	0,025-6,35	45±14
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 13 мм	69,4	43,0	3,0	HRC 30-47	0,025-6,35	47±14
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 14 мм	69,4	43,0	4,0	HRC 30-47	0,025-6,35	55±11
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 11 мм	76,2	49,3	1,0	HRC 30-47	0,025-6,35	31±9
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 12 мм	76,2	49,3	2,0	HRC 30-47	0,025-6,35	42±8
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 13 мм	76,2	49,3	3,0	HRC 30-47	0,025-6,35	55±14
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 14 мм	76,2	49,3	4,0	HRC 30-47	0,025-6,35	70±14
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер J толщина 11 мм	84,3	55,5	1,0	HRC 30-47	0,025-6,35	43±10
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер J толщина 12 мм	84,3	55,5	2,0	HRC 30-47	0,025-6,35	51±10
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер J толщина 13 мм	84,3	55,5	3,0	HRC 30-47	0,025-6,35	66±16
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибального PERSONA ограниченного, размер J толщина 14 мм	84,3	55,5	4,0	HRC 30-47	0,025-6,35	87±17

3.1.58 Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов

Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер А

Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер В

Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер С

Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер D


Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер E


Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер F

Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер G

Компонент примерочный тибальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер H

Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер J
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер A
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер B
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер C
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер D
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер E
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер F
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер G
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер H
 Компонент примерочный тибиаальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер J

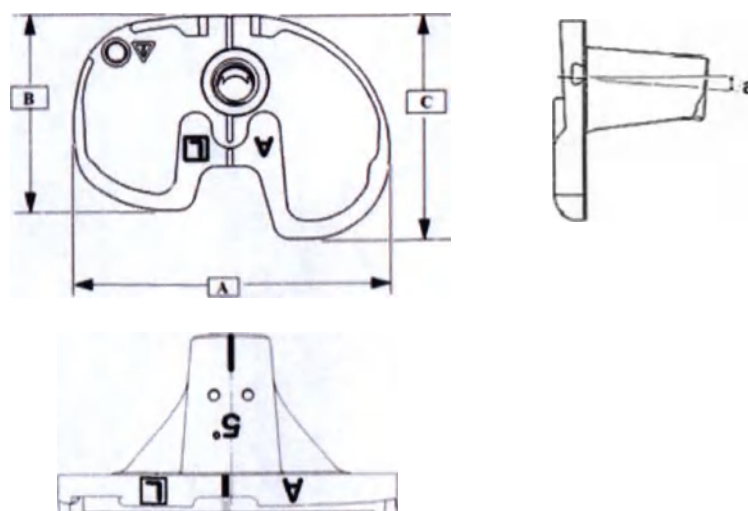

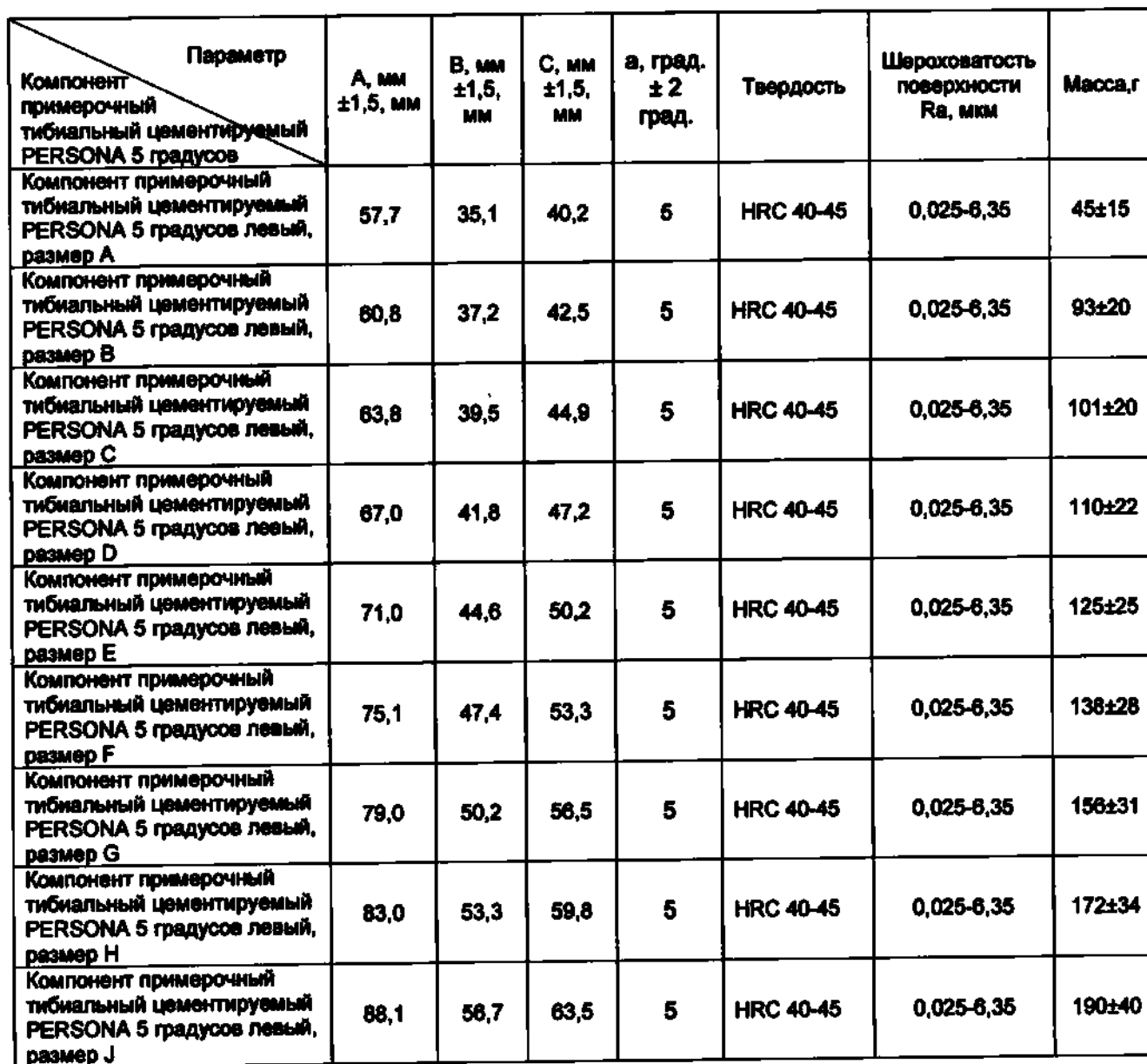


Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер A	57,7	35,1	40,2	5	HRC 40-45	0,025-6,35	45±15
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер B	60,8	37,2	42,5	5	HRC 40-45	0,025-6,35	93±20
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер C	63,8	39,5	44,9	5	HRC 40-45	0,025-6,35	101±20
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер D	67,0	41,8	47,2	5	HRC 40-45	0,025-6,35	110±22
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер E	71,0	44,6	50,2	5	HRC 40-45	0,025-6,35	125±25
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер F	75,1	47,4	53,3	5	HRC 40-45	0,025-6,35	138±28
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер G	78,0	50,2	56,5	5	HRC 40-45	0,025-6,35	156±31
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер H	83,0	53,3	58,8	5	HRC 40-45	0,025-6,35	172±34
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер J	88,1	56,7	63,5	5	HRC 40-45	0,025-6,35	193±40

3.1.59 Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA

Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA 10-14 мм


Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA 16-20 мм

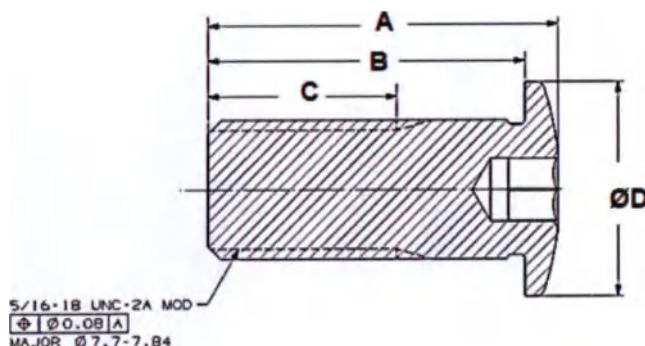

Винт примерочный нижний блокирующий	Параметр	A, мм ±1,5 мм	B, мм ±0,8 мм	C, мм ±1,5 мм	D, мм ±1,0 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
---	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	---	----------


PERSONA							
Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA 10-14 мм	19,9	18,0	9,5	12,0	HRC 40-48	0,025-6,35	7±3
Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA 16-20 мм	25,9	24,0	9,5	12,0	HRC 40-48	0,025-6,35	9±3

3.1.60 Ножка удлиняющая примерочная PERSONA, диаметр 14 мм, добавочная длина 30 мм

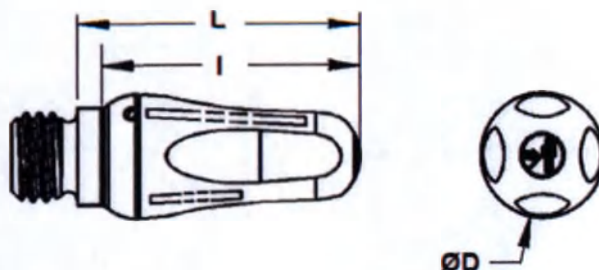

Параметр	L, мм ±1,5 мм	l, мм ±0,5 мм	D, мм ±0,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Ножка удлиняющая примерочная PERSONA, диаметр 14 мм, добавочная длина 30 мм						
Ножка удлиняющая примерочная PERSONA, диаметр 14 мм, добавочная длина 30 мм	32,4	29,7	14,0	Не менее HRC 38	0,025-6,35	28±6

3.1.61 Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм

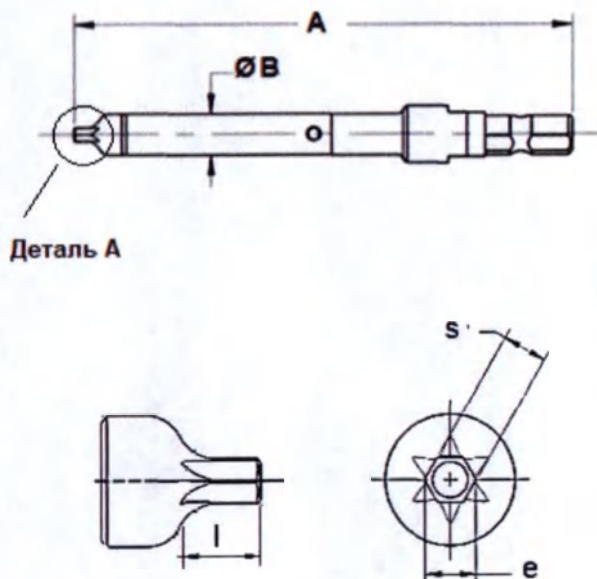


Деталь А

Параметр	A, мм ±1,8	B, мм ±0,5	s ^{0-0.03} , мм	e, мм ±0,02	l, мм ±0,2	Твердость отвертки	Твердость головки	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Отвертка									


шестигранная PERSONA 2.5 мм	мм	мм							
Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм	89,2	7,2	2,5	2,8	4,2	HRC 38- 52	HRC 48- 54	0,025-6,35	31±6

3.1.62 Блок опилочный дистальный PERSONA 0 градусов

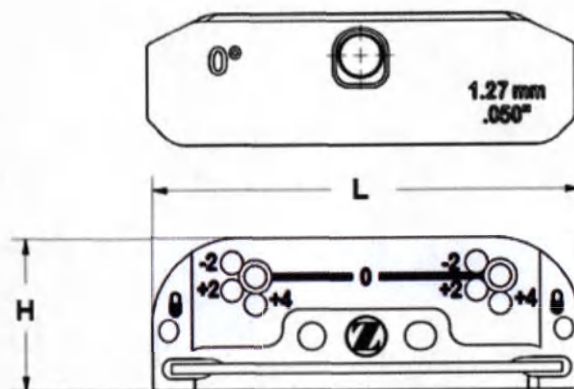

Параметр	H, мм ± 1,5 мм	L, мм ± 1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный дистальный PERSONA 0 градусов	22,3	63,0	HRC 38-45	0,025-6,35	104±23

3.1.63 Ограничитель сверла тибального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм

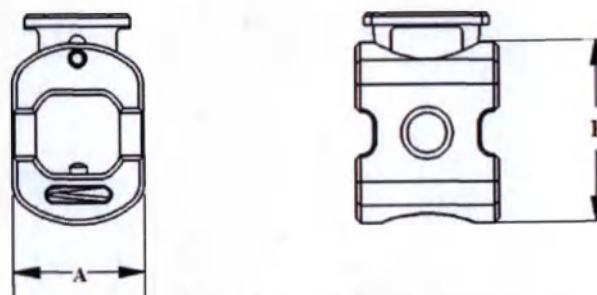

Параметр	A, мм ±2 мм	B, мм ±3 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Ограничитель сверла тибального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм	22	30	HRC 38-52	0,025-6,35	60±12

3.1.64 Сверло тибальное для ножки удлиняющей PERSONA (14x30мм), диаметр 15.7 мм



Параметр	A, мм ±1 мм	B, мм ±0,3 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Радиальное биение, мм	Масса, г
Сверло тибальное для ножки удлиняющей PERSONA (14x30мм), диаметр 15.7 мм	169,1	15,7	HRC 48-52	0,025-6,35	0,13	124±25

Сверло тибальное для ножки удлиняющей PERSONA (14x30мм), диаметр 15.7 мм применяется с хирургической дрелью.


3.1.65 Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм



Параметр	A, мм ±2 мм	B, мм ±0,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Радиальное биение, мм	Масса, г
Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм	127	6,4	HRC 40-48	0,013-1,6, рекомендованное значение 1,27	0,13	34±7

Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм применяется с хирургической дрелью.

3.1.66 Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм

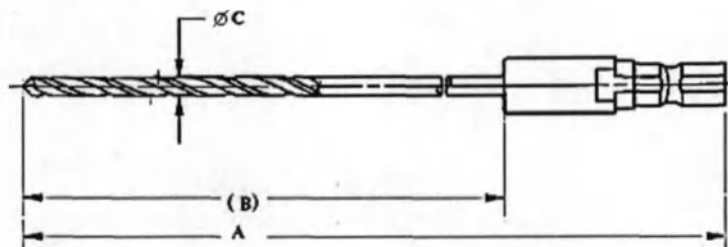


Параметр	A, мм ±4,5 мм	B ^{+1,5} _{-3,2} , мм	C, мм ±0,2 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Радиальное биение,	Масса , г
Сверло для							

отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм						мм	
Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм	152,2	114, 2	3,2	HRC 44-48	0,013-1,6, рекомендованное значение 1,27	0,13	21±4


Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм применяется с хирургической дрелью.

3.1.67 Стержень выравнивающий

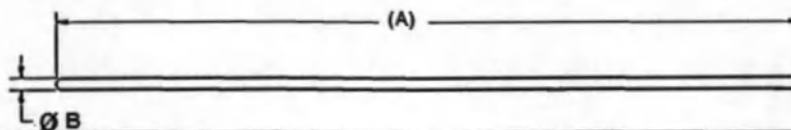


Параметр	A, мм ±5,3 мм	B, мм ±0,7 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Стержень выравнивающий					
Стержень выравнивающий	406,4	6,4	HRC 38-52	0,025-6,35	99±20

3.1.68 Стержень выравнивающий с муфтой

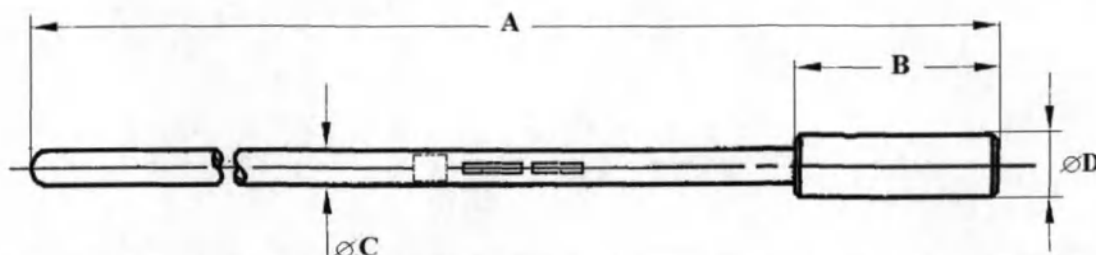


Параметр	A, мм ±5,3 мм (длина стержня)	B, мм ±1,3 мм (длина муфты)	C, мм ±0,7 мм	D, мм ±0,8 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Стержень выравнивающий с муфтой							
Стержень выравнивающий с муфтой	374,7	38,1	6,4	11,4	HRC 38-52	0,025-6,35	112±22

3.1.69 Извлекатель шпилек NexGen

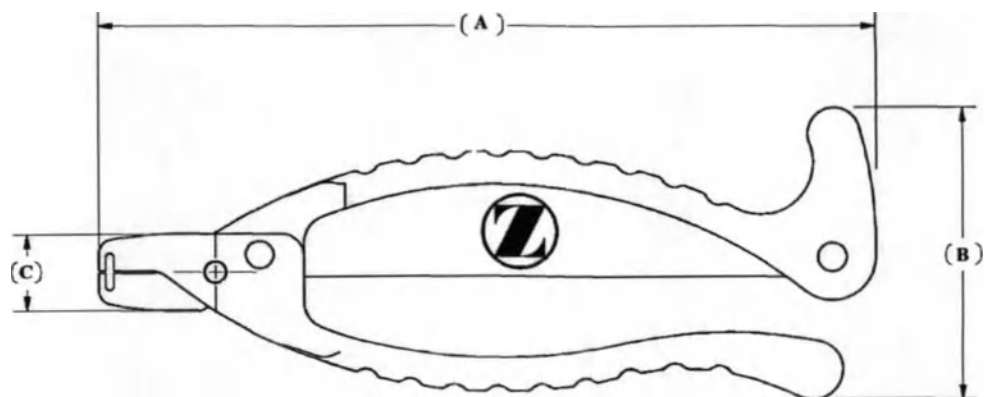



Параметр	A, мм ±2,5 мм	B, мм (в состоянии «свето») ±2,5 мм	C, мм ±1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Усилие сведения бранш, Н	Масса, г
Изалекаатель шпилек NexGen							
Изалекаатель шпилек NexGen	178,2	67,8	17,7	HRC 38- 52	0,025-6,35	max 1735	319±64

3.1.70 Рукоятка быстроразъёмная NexGen

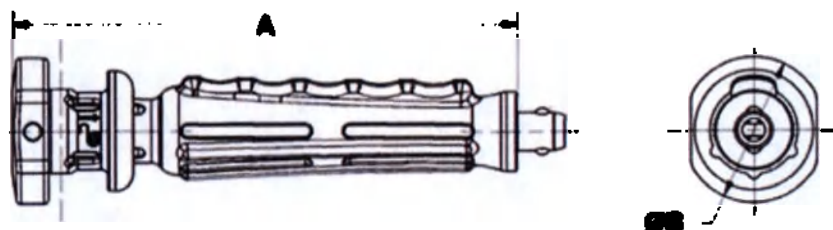

Параметр	A, мм ±5,5 мм	B, мм ±1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Рукоятка быстроразъёмная NexGen					
Рукоятка быстроразъёмная NexGen	142,2	40,6	HRC 38-57	0,025-6,35	440±80


3.1.71 Адаптер выравнивающий NexGen

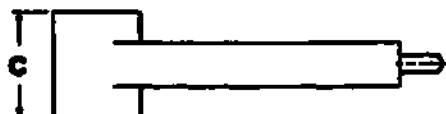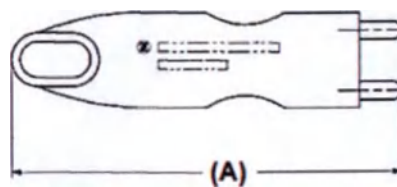

Параметр	A, мм ±1,5 мм	C, мм ±1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности	Масса, г



Адаптер выравнивающий NexGen				Ra, мкм	
Адаптер выравнивающий NexGen	70,7	19,0	HRC 38-57	0,025-6,35	59±12

3.1.72 Блок резекционный NexGen повторного вальгусного среза 2 градуса

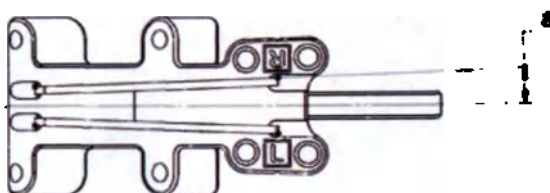



Параметр	A, мм ±3 мм	α, град. ± 1 град.	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок резекционный NexGen повторного вальгусного среза 2 градуса	64	2	HRC 38-47	0,025-6,35	140±28

3.1.73 Блок резекционный NexGen повторного варусного среза 2 градуса

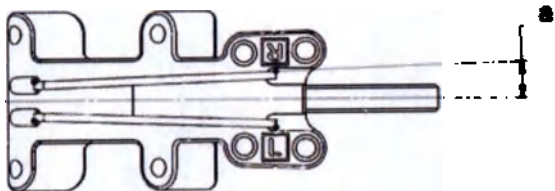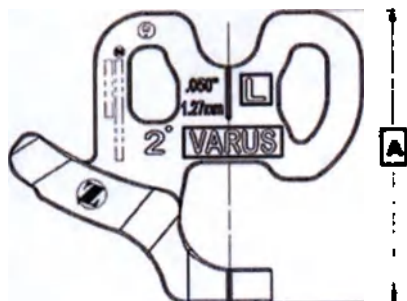

Блок резекционный NexGen повторного варусного среза 2 градуса	Параметр	A, мм ±3 мм	α, град. ± 1 град.	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок резекционный NexGen повторного варусного среза 2 градуса		64	2	HRC 38-47	0,025-6,35	146±29


3.1.74 Направитель остеотомии надколенника NexGen

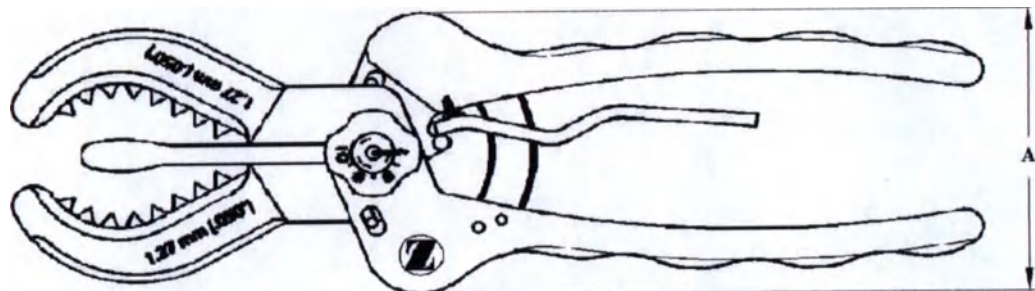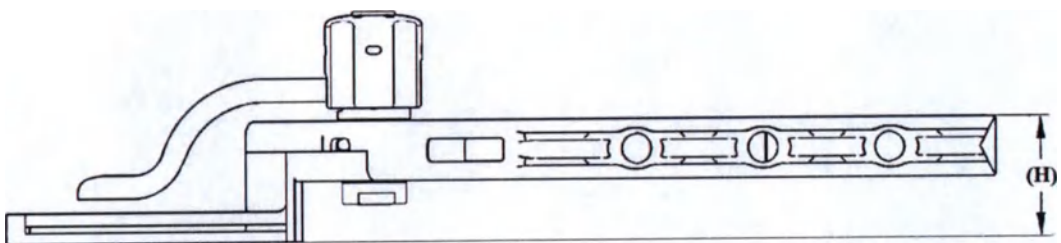

Параметр	A, мм ±5,5	H, мм ±1,5	Твердость	Шероховатость поверхности	Усилие сведения	Масса, г
----------	---------------	---------------	-----------	---------------------------	-----------------	----------

Направитель остеотомии надколенника NexGen	мм	мм		Ra, мкм	бразш, Н	
Направитель остеотомии надколенника NexGen	68,6	25,4	HRC 38-52	0,025-6,35	max 1735	440±88

3.1.75 Зажим надколенника NexGen

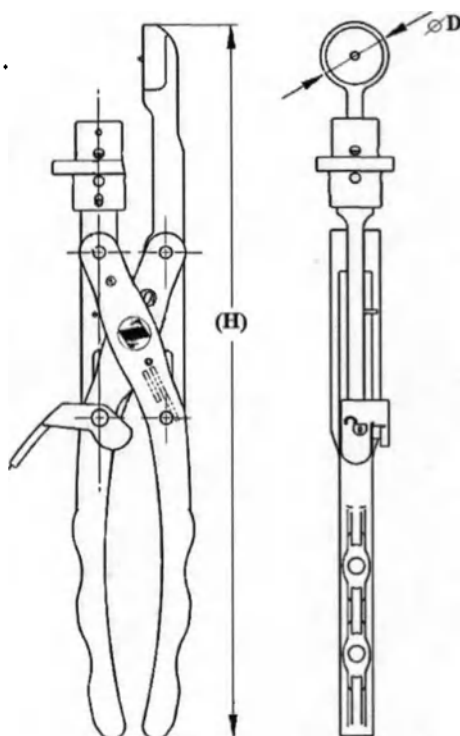

Параметр	H, мм ±20 мм	D, мм ±1,3 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Усилие сведения бразш, Н	Масса, г
Зажим надколенника NexGen	270	26,0	HRC 38-52	0,025-6,35	max 1735	560±112

3.1.76 Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen

Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 26


Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 29

Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 32

Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 35

Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 38


Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 41

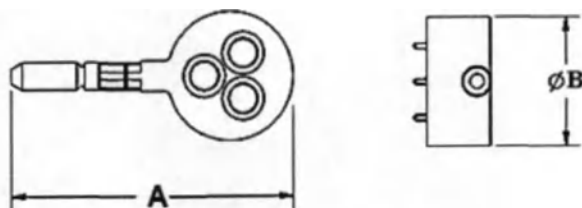

	A, мм	B, мм	Твердость	Шероховатость	Масса, г
--	-------	-------	-----------	---------------	----------

Параметр	±1,5 мм	±1,2 мм		поверхности Ra, мкм	
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen					
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 26	65,9	27,2	HRC 38-47	0,025-6,35	64±13
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 29	67,4	30,1	HRC 38-47	0,025-6,35	80±16
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 32	68,9	33,1	HRC 38-47	0,025-6,35	97±19
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 35	70,4	36,1	HRC 38-47	0,025-6,35	115±23
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 38	72,0	39,2	HRC 38-47	0,025-6,35	137±27
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 41	73,4	42,1	HRC 38-47	0,025-6,35	158±32


3.1.77 Штангенциркуль для бедренного компонента NexGen

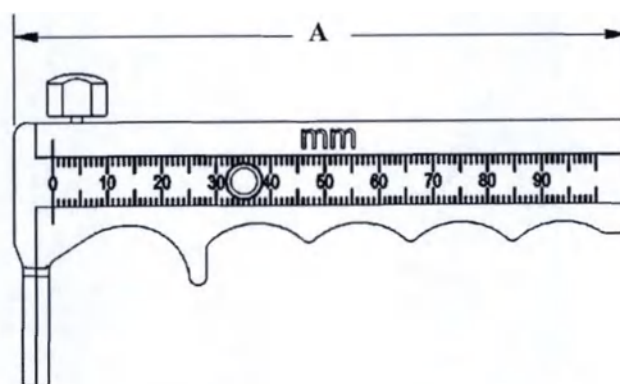

Параметр	A, мм (в собранном положении) ±1,5 мм	Длина шкалы, мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Штангенциркуль для бедренного компонента NexGen	113,2	100,0	HRC 38-47	0,025-6,35	95±19

*Цена деления штангенциркуля для бедренного компонента NexGen 1 мм.


3.1.78 Шаблон примерочный надколенника NexGen

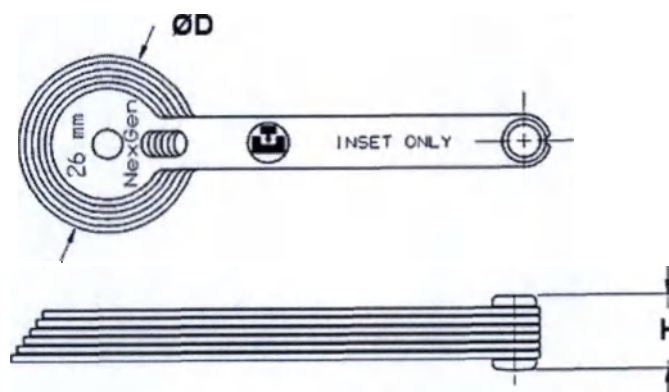

Параметр	H, мм ±1,5 мм	D, мм (диаметр большой пластины)	Твердость	Шероховатость поверхности	Масса, г
----------	------------------	--	-----------	------------------------------	----------

Шаблон примерочный надколенника NexGen		$\pm 1,5$ мм		Ra, мкм	
Шаблон примерочный надколенника NexGen	16,5	40,9	HRC 38-47	0,025-6,35	139 $\pm$ 28

3.1.79 Сверло бедренное NexGen, размер A,B

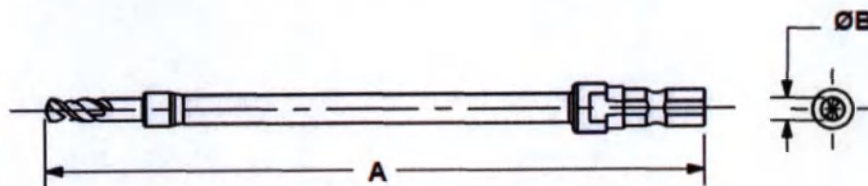

Параметр	A, мм ± 3 мм	B, мм $\pm 0,5$ мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Радиальное биение, мм	Масса, г
Сверло бедренное NexGen, размер A,B	127	4,4	HRC 40-48	0,013-1,6, рекомендованное значение 1,27	0,13	27 $\pm$ 5

Сверло бедренное NexGen, размер A,B применяется с хирургической дрелью.

3.1.80 Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen

Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 26 мм толщина 7.5 мм


Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 29 мм толщина 8.0 мм

Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 32 мм толщина 8.5 мм

Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 35 мм толщина 9.0 мм

Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 38 мм толщина 9.5 мм


Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 41 мм толщина 10.0 мм

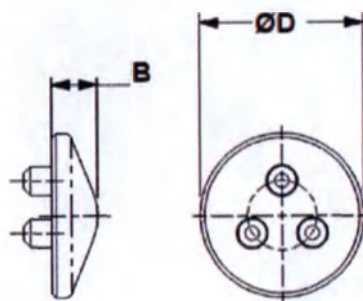

Параметр	D, мм $\pm 1,5$ мм	B, мм $\pm 1,5$ мм	Масса, г
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen			
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 26 мм толщина 7.5 мм	26,0	7,5	4 $\pm$ 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 29 мм толщина 8.0 мм	29,0	8,1	5 $\pm$ 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 32 мм толщина 8.5 мм	32,0	8,5	6 $\pm$ 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 35 мм толщина 9.0 мм	34,9	9,0	7 $\pm$ 2


Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 38 мм толщина 9.5 мм	38,1	9,5	9±2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 41 мм толщина 10.0 мм	40,9	10,0	10±2

3.1.81 Экстрактор ножки примерочной тибиальной NexGen

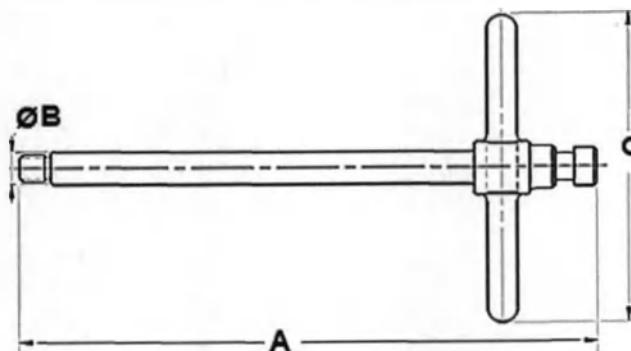


Параметр	A, мм ±2,5 мм	B, мм ±0,5 мм	C, мм ±2,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Экстрактор ножки примерочной тибиальной NexGen	165,1	9,5	88,9	HRC 38-45	0,025-6,35	140±28

3.1.82 Шпилька фиксирующая с короткой головкой NexGen 25 мм

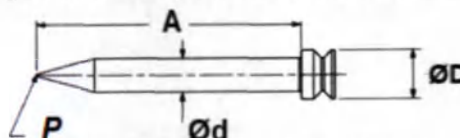

Параметр	A, мм ±1,5 мм	d, мм ±0,2 мм	D, мм ±0,2 мм	p, мм радиус притупления рабочей части инструмента	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Шпилька фиксирующая с короткой головкой NexGen 25 мм	25,0	3,1	4,6	не более 0,51	HRC 45-48	0,013-1,6 мкм, рекомендованное значение 1,27 мкм	1,6±0,5


3.1.83 Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов)

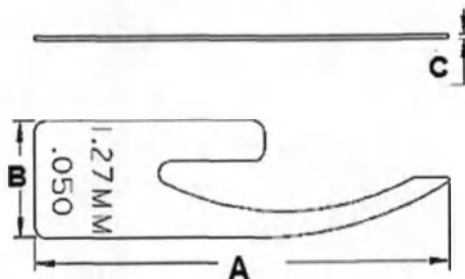

Параметр	A, мм ±1,5 мм	B, мм ±1,5 мм	C ^{0,3} _{-0,5} , мм	Твердость	Шероховатость поверхности	Масса, г
----------	------------------	------------------	---------------------------------------	-----------	------------------------------	----------

Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов)					Ra, мкм	
Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов)	114,3	31,8	1,3	HRC 38- 45	0,025-6,35	19±4

3.1.84 Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм

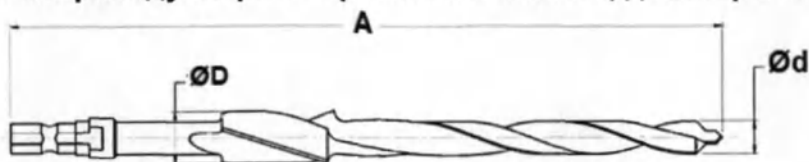

Параметр	A, мм ±3,5 мм	D, мм ±0,3 мм	d, мм ±0,3 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Радиальное биение, мм	Масса, г
Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм	171,5	12,7	7,9	HRC 38-45	0,025-6,35	0,13	41±8


Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм применяется с хирургической дрелью.

3.1.85 Блок примерочный MIS Quad-Sparing


Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 10 мм

Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 12 мм

Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 14 мм

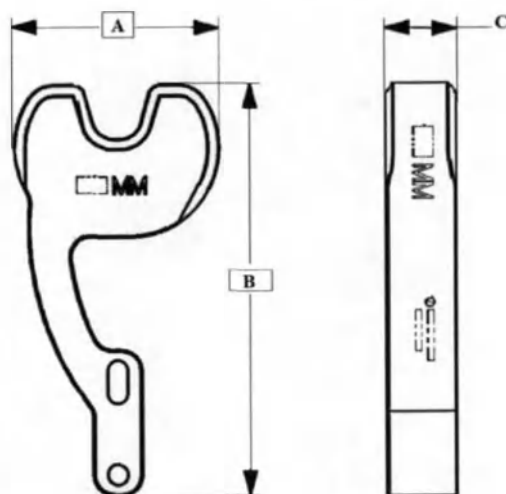


Параметр	A, мм ±1,5 мм	B, мм ±1,5 мм	C, мм ±0,7 мм	Масса, г
Блок примерочный MIS Quad-Sparing				
Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 10 мм	64,5	127,9	19,2	98±20

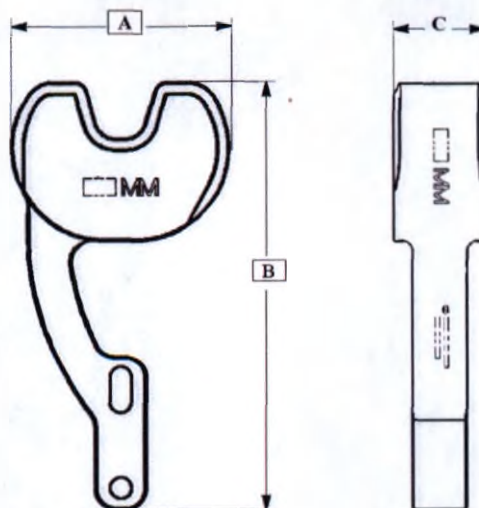


Параметр	A, мм ±1,5 мм	B, мм ±1,5 мм	C, мм ±0,7мм	Масса, г
Блок примерочный MIS Quad-Sparing				
Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 12 мм	64,5	127,9	21,2	105±21
Блок примерочный MIS Quad-Sparing, размер 14 мм	64,5	127,9	23,2	111±22

3.1.86 Отвертка торсионная шестигранная NexGen 2.0 мм

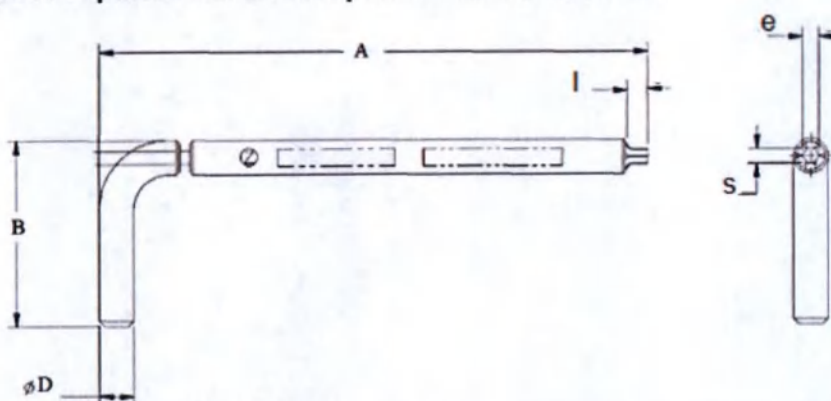

Параметр	A, мм ±2,5 мм	B, мм ±2,5 мм	D, мм ±0,5 мм	e, мм ±0,2 мм	s, мм ±0,2 мм	l, мм ±0,5 мм	Твердость отвертки	Твердость головки	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Отвертка торсионная шестигранная NexGen 2.0 мм										
Отвертка торсионная шестигранная NexGen 2.0 мм	76,2	25,4	4,8	2,8	2,5	4	HRC 48-56	HRC 48-54	0,025-6,35	12±3


3.1.87 Стержень бедренный интрамедуллярный NexGen

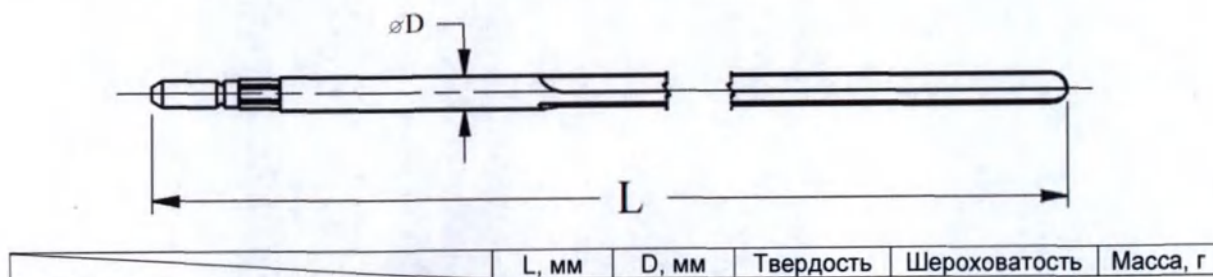

L, мм	D, мм	Твердость	Шероховатость	Масса, г
-------	-------	-----------	---------------	----------


Параметр	$\pm 2,5$ мм	± 1 мм		поверхности Ra, мкм	
Стержень бедренный интрамедуллярный NexGen					
Стержень бедренный интрамедуллярный NexGen	465,9	8	HRC 38-47	0,025-6,35	93 $\pm$ 19

3.1.88 Рукоятка Т-образная модульная NexGen

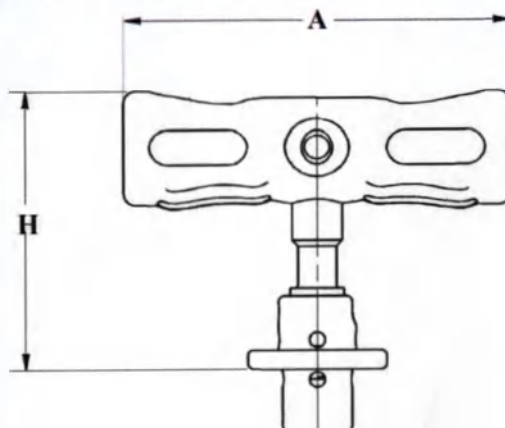


Параметр	A, мм ± 3 мм	H, мм $\pm 1,5$ мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Рукоятка Т-образная модульная NexGen					
Рукоятка Т-образная модульная NexGen	100	72,2	HRC 38-50	0,025-6,35	329 $\pm$ 66

3.1.89 Направитель бедренный выравнивающий вальгусный NexGen

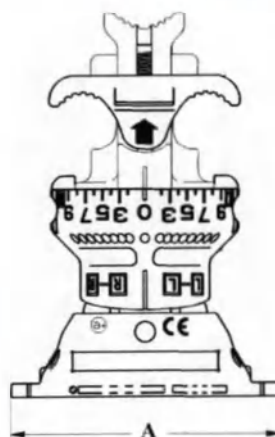


Параметр	A, мм $\pm 2,5$ мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Направитель бедренный выравнивающий вальгусный NexGen				
Направитель бедренный выравнивающий вальгусный NexGen	63,5	HRC 38-61	0,025-6,35	332 $\pm$ 66

3.1.90 Блок резекционный бедренный дистальный NexGen

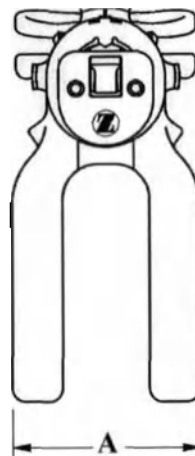

Параметр	А, мм ±1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Усилие сведения бранш, Н	Масса , г
Блок резекционный бедренный дистальный NexGen	34,4	HRC 38-52	0,025-6,35	max 1735	109±2 2


3.1.91 Блок опилочный фиксированный/без фиксации 0 градусов NexGen

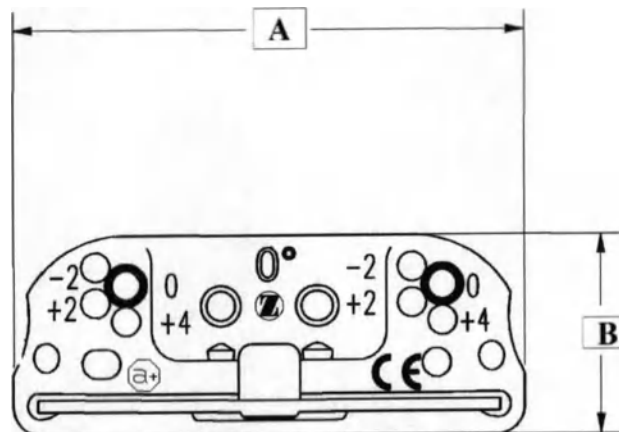

Параметр	А, мм ±1,5 мм	В, мм ±1,5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Блок опилочный фиксированный/без фиксации 0 градусов NexGen	58,1	22,3	HRC 38-47	0,025-6,35	85±17


3.1.92 Принадлежности

3.1.92.1 Контейнер для инструментов одноуровневый

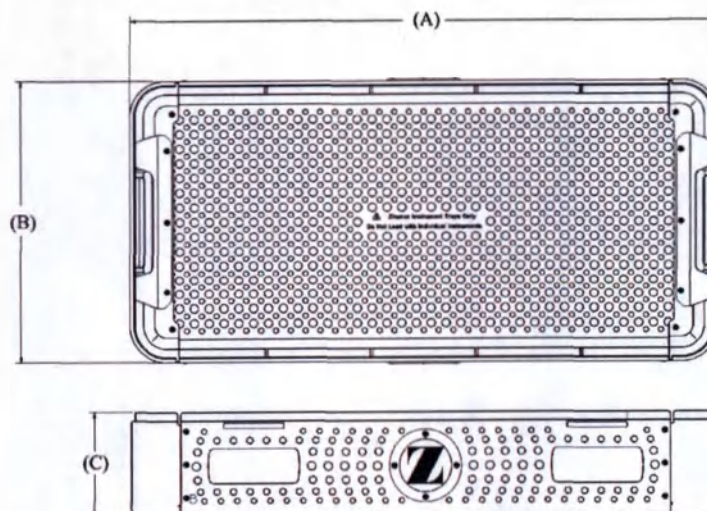


Параметр	A, мм ± 15 мм	B, мм ± 10 мм	C, мм ± 7 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для инструментов одноуровневый	569	277	101	0,025-6,35	2,5 $\pm$ 0,125

3.1.92.2 Контейнер для инструментов малый (1/2)

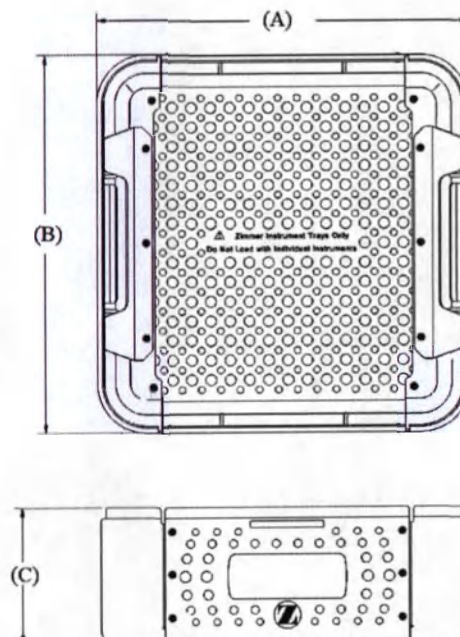


Параметр	A, мм ± 10 мм	B, мм ± 10 мм	C, мм ± 7 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для инструментов малый (1/2)	277	277	101	0,025-6,35	1,44 $\pm$ 0,075

3.1.92.3 Контейнер для инструментов основной

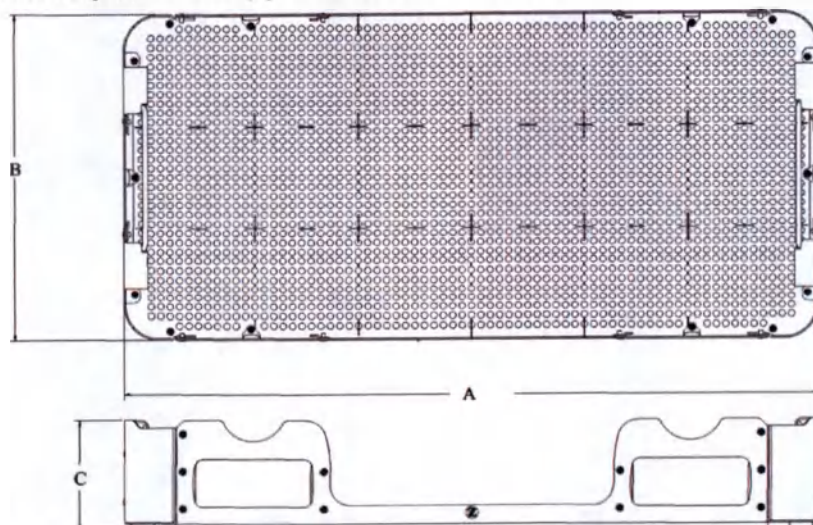


Параметр	A, мм ± 15 мм	B, мм ± 8 мм	C, мм ± 5 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для инструментов основной	529	251	84	0,025-6,35	1,6±0,08

3.1.92.4 Контейнер для инструментов основной малый (1/2)

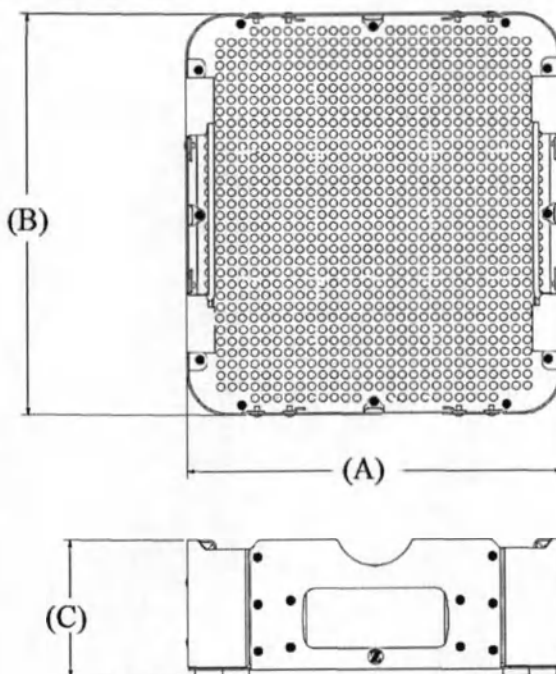


Параметр	A, мм ± 15 мм	B, мм ± 10 мм	C, мм ± 7 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для инструментов основной малый (1/2)	236	251	84	0,025-6,35	2,5±0,125

3.1.92.5 Контейнер для шпилек

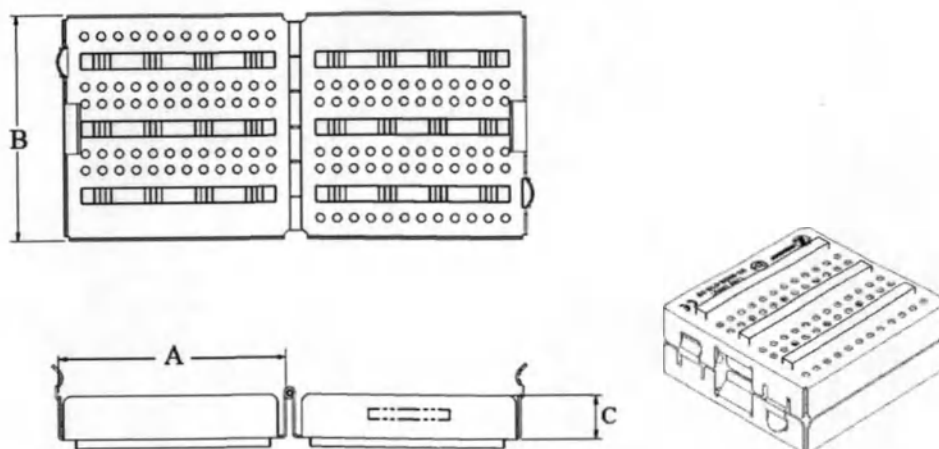


Параметр	A, мм ± 5 мм	B, мм ± 5 мм	C, мм ± 2 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для шпилек	86	86	16	0,025-6,35	0,21±0,02

3.1.92.6 Контейнер для инструментов тибиаальный основной PERSONA

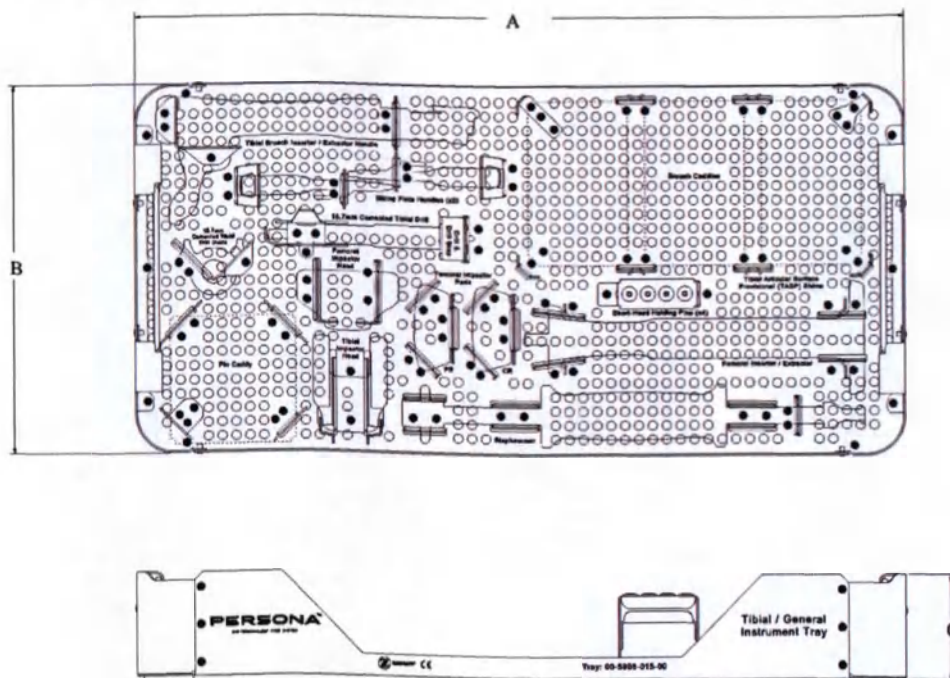

Параметр	A, мм ± 15 мм	B, мм ± 8 мм	C, мм ± 5 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для инструментов тибиаальный основной PERSONA	529	251	70	0,025-6,35	2,0±0,125

3.1.92.7 Контейнер для инструментов бедренный основной PERSONA

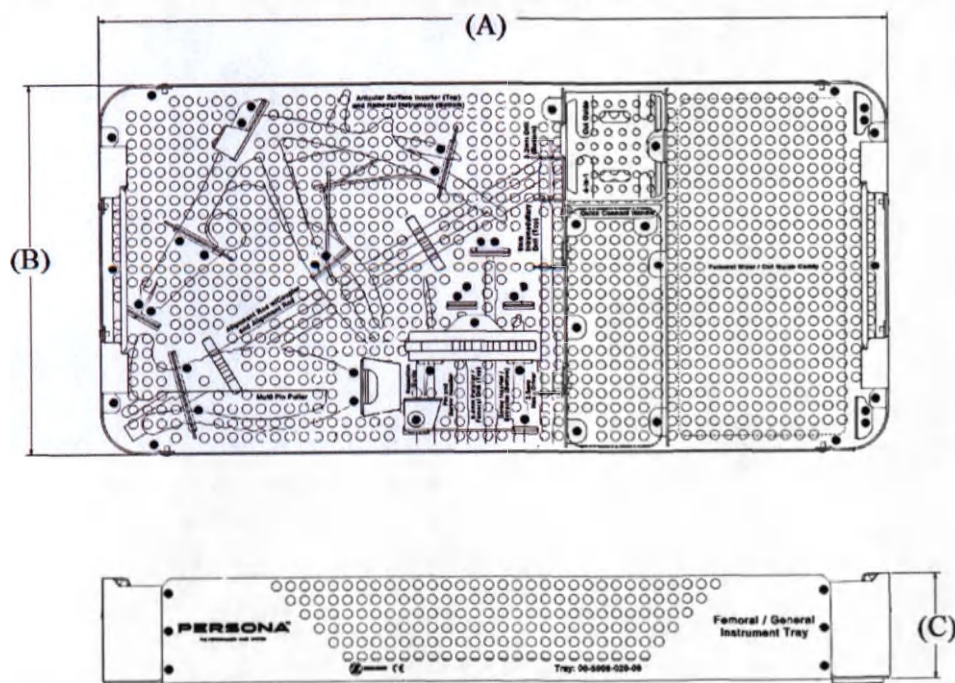

Параметр	A, мм ± 15 мм	B, мм ± 8 мм	C, мм ± 5 мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Контейнер для инструментов бедренный основной PERSONA	529	251	70	0,025-6,35	2,06 $\pm$ 0,12 5

3.1.92.8 Контейнер для инструментов для надколенника PERSONA


Панель съемная для контейнера для инструментов с линиями	А, мм ±3, мм	В, мм ±3, мм	С, мм ±2, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Панель съемная для контейнера для инструментов с линиями	97	75	5	0,025-6,35	35±5

3.1.92.12 Панель съемная для контейнера для инструментов




Панель съемная для контейнера для инструментов	А, мм ±3, мм	В, мм ±3, мм	С, мм ±2, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Панель съемная для контейнера для инструментов	97	75	5	0,025-6,35	35±5

3.1.92.13 Панель съемная для контейнера для инструментов прямоугольная с линиями

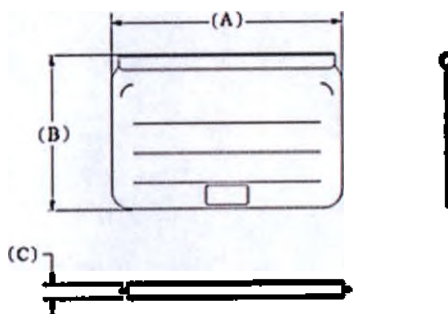


Панель съемная для контейнера для инструментов прямоугольная с линиями	А, мм ±3, мм	В, мм ±3, мм	С, мм ±2, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Панель съемная для контейнера для инструментов прямоугольная с линиями	76	50	5	0,025-6,35	24±5

3.1.92.14 Поддон для инструментов 101.6 мм

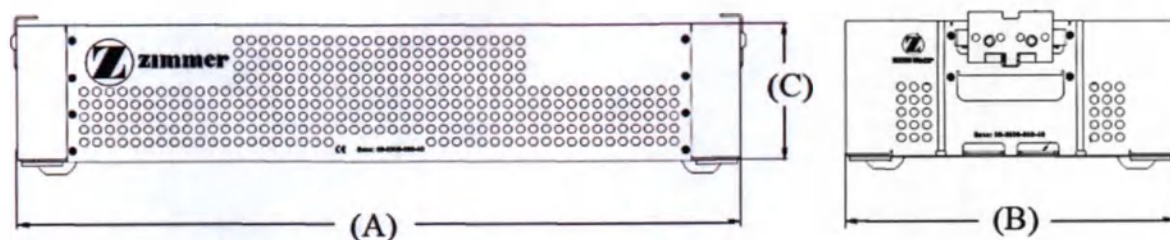

Параметр	A, мм ±15, мм	B, мм ±10, мм	C, мм ±5, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, кг
Поддон для инструментов 101.6 мм	537	277	101	0,025-6,35	2,56±0,2


3.1.92.15 Крышка контейнера для инструментов базовая

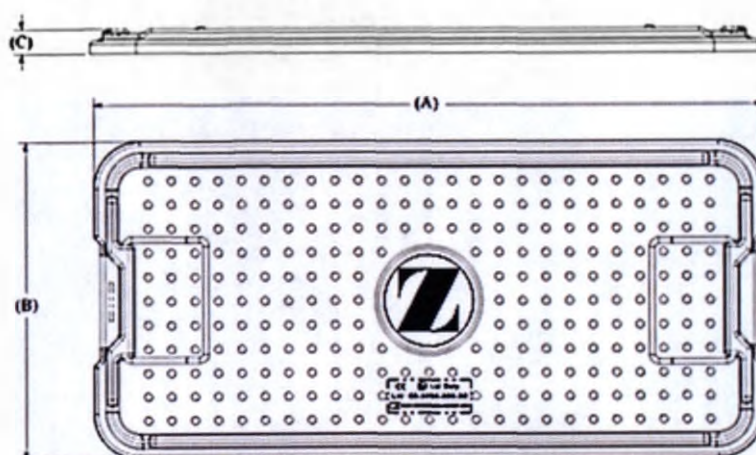

Параметр	A, мм ±15, мм	B, мм ±10, мм	C, мм ±3, мм	Масса, кг
Крышка контейнера для инструментов базовая				


Крышка контейнера для инструментов базовая	545	253	20	0,64±0,05
--	-----	-----	----	-----------

3.1.92.16 Крышка контейнера для инструментов основная

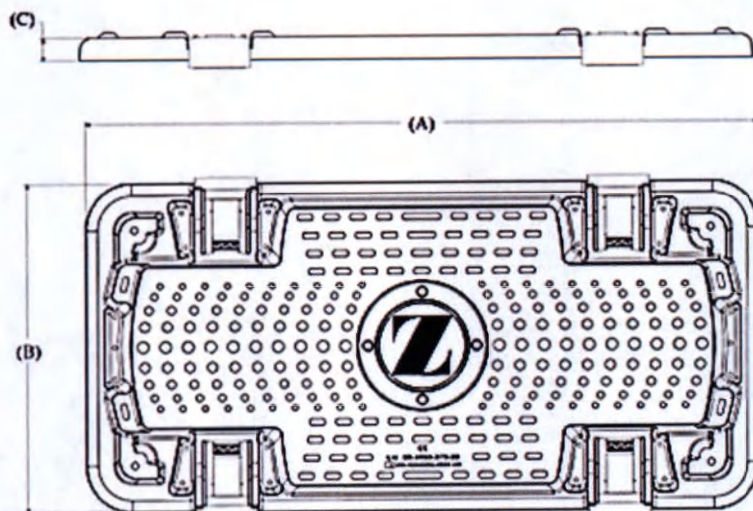

Параметр	A, мм ±15, мм	B, мм ±10, мм	C, мм ±3, мм	Масса, кг
Крышка контейнера для инструментов основная	569	277	20	0,7±0,06

3.1.92.17 Крышка контейнера для инструментов малая (1/2)

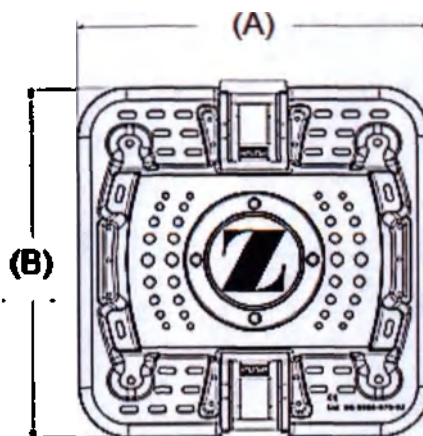


Параметр	A, мм ±10, мм	B, мм ±10, мм	C, мм ±3, мм	Масса, кг
Крышка контейнера для инструментов малая (1/2)	277	277	20	0,37±0,04

Секция для контейнера для инструментов PERSONA

Секции применяются для фиксации инструмента внутри контейнера/поддона. Форма секции и расположение держателей разработаны под конкретный инструмент/инструменты/приспособления/примерочные компоненты, поэтому внешний вид секций разный. Секции могут применяться как для фиксации одного определенного инструмента/приспособления/примерочного компонента, так могут быть разработаны для расположения нескольких разных инструментов/размерного ряда (части размерного ряда) инструментов/приспособлений/примерочных компонентов. Секции могут сопровождаться заклепками, винтами и шайбами в необходимом количестве (для некоторых типов секций) для установки внутри контейнеров/поддонов.

Изображения общего вида вариантов секций представлены ниже. На изображениях обозначены размеры в зависимости от типа секции. Приведенные изображения являются примерами секций.

3.1.92.18 Секция для контейнера для сверел 15,7 мм PERSONA

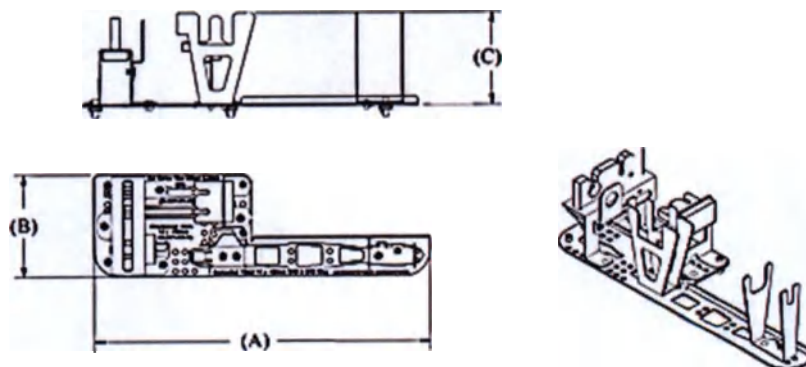

Параметр	A, мм ±10, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±5, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для сверел 15,7 мм PERSONA	249	76,2	68	0,025-6,35	273±41

3.1.92.19- 3.1.92.23 Секция для контейнера для рашпилей PERSONA


Секция для контейнера для рашпилей A-B PERSONA

Секция для контейнера для рашпилей C-D PERSONA

Секция для контейнера для рашпилей E-F PERSONA

Секция для контейнера для рашпилей G-H PERSONA


Секция для контейнера для рашпилей J PERSONA

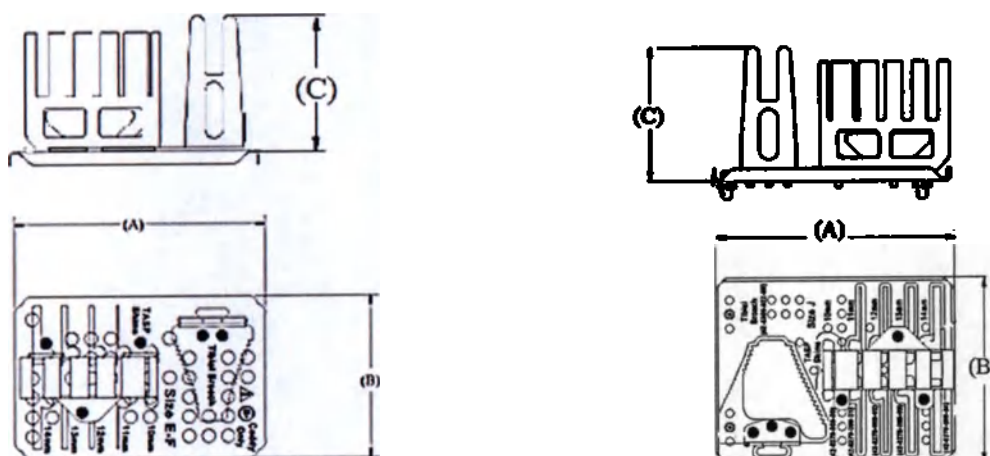

* на рисунке представлен пример секции



Параметр Секция для контейнера для рашпелей PERSONA	A, мм ±10, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±10, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для рашпелей A-B PERSONA	122	79	55	0,025-6,35	143±25
Секция для контейнера для рашпелей C-D PERSONA	122	79	55	0,025-6,35	143±25
Секция для контейнера для рашпелей E-F PERSONA	122	79	57	0,025-6,35	143±25
Секция для контейнера для рашпелей G-H PERSONA	122	79	61	0,025-6,35	143±25
Секция для контейнера для рашпелей J PERSONA	122	94	68	0,025-6,35	183±30

3.1.92.24 Секция для контейнера для инструментов передней ориентировки PERSONA

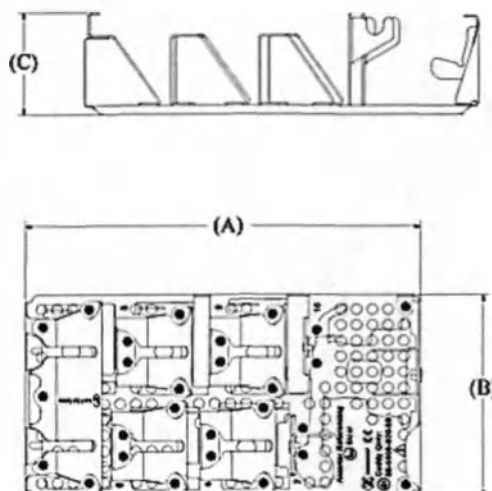

Параметр Секция для контейнера для инструментов передней ориентировки PERSONA	A, мм ±10, мм	B, мм ±7, мм	C, мм ±5, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для инструментов передней ориентировки PERSONA	239	122	62	0,025-6,35	540±55

3.1.92.25 Секция Вальгус/Варус для контейнера для инструментов PERSONA

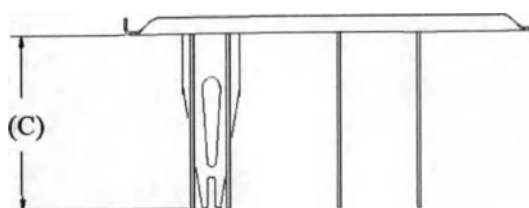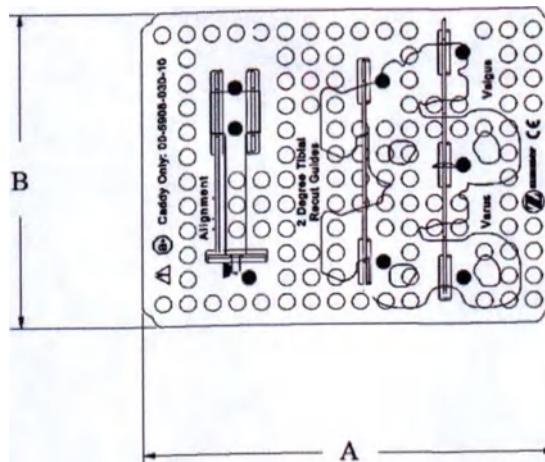


Секция Вальгус/Варус для контейнера для инструментов PERSONA	Параметр	A, мм ±10, мм	B, мм ±7, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция Вальгус/Варус для контейнера для инструментов PERSONA		150	122	57	0,025-6,35	248±37

3.1.92.26- 3.1.92.28 Секция для контейнера спейсеров PERSONA

Секция для контейнера спейсеров 10 мм PERSONA

Секция для контейнера спейсеров 12 мм PERSONA


Секция для контейнера спейсеров 14 мм PERSONA

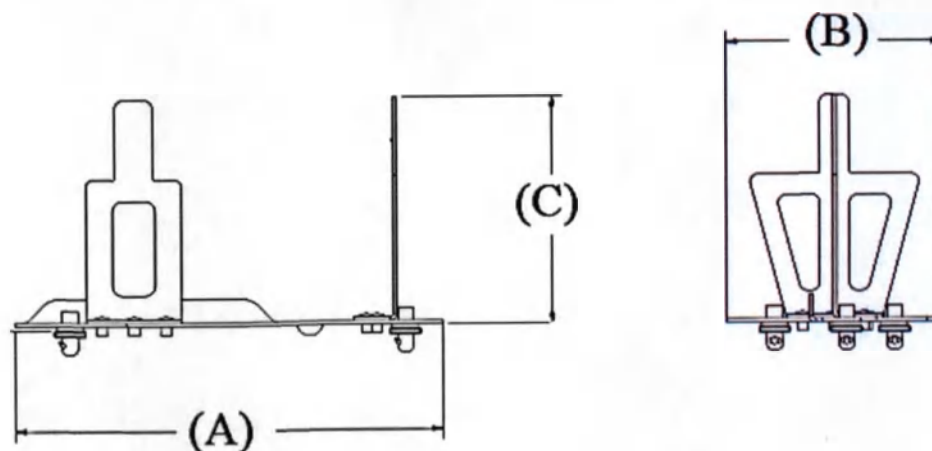

* на рисунке представлен пример секции


Параметр	A, мм ±10, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±5, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера спейсеров PERSONA					
Секция для контейнера спейсеров 10 мм PERSONA	128	64	68	0,025-6,35	73±10
Секция для контейнера спейсеров 12 мм PERSONA	128	64	68	0,025-6,35	73±10
Секция для контейнера спейсеров 14 мм PERSONA	128	64	68	0,025-6,35	73±10

3.1.92.29 Секция для контейнера для проксимального направителя EM PERSONA

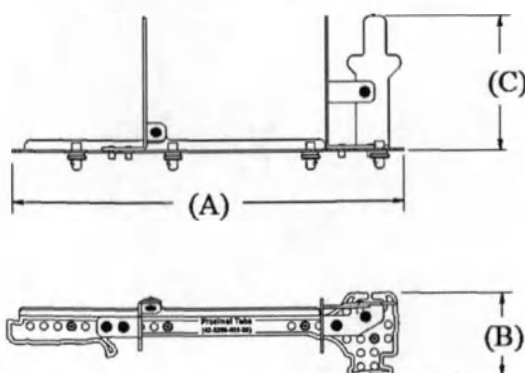


Параметр	A, мм ±10, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для проксимального направителя EM PERSONA					
Секция для контейнера для проксимального направителя	204	44	68	0,025-6,35	84±13

3.1.92.30 Секция для контейнера для дистального стержня EM PERSONA

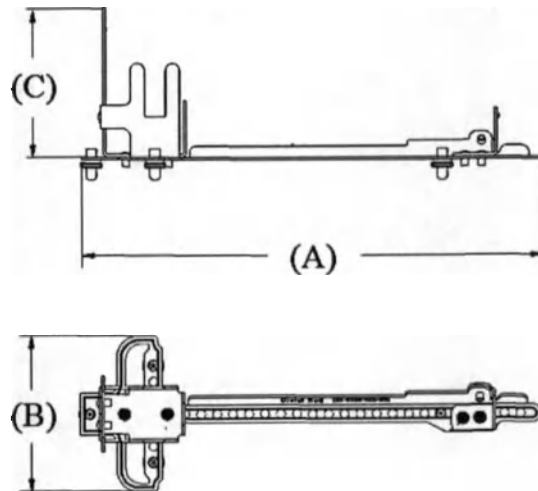


Секция для контейнера для дистального стержня EM PERSONA	Параметр	A, мм ± 10 , мм	B, мм ± 7 , мм	C, мм ± 7 , мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для дистального стержня EM PERSONA		207	69	68	0,025-6,35	85 $\pm$ 13

3.1.92.31 Секция для контейнера для трубки для лоджки EM PERSONA

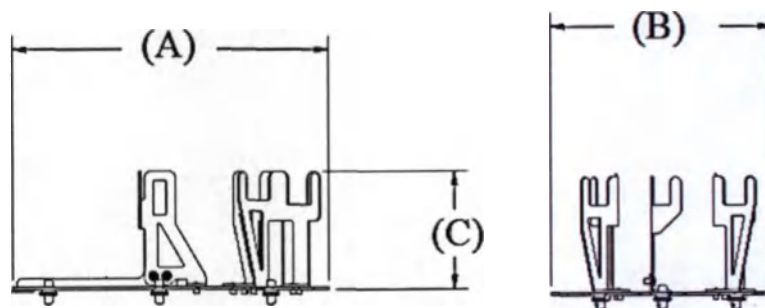


Секция для контейнера для трубины для лодыжки EM PERSONA	Параметр	A, мм ± 10 , мм	B, мм ± 10 , мм	C, мм ± 7 , мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для трубины для лодыжки EM PERSONA		183	129	68	0,025-6,35	128 $\pm$ 20

3.1.92.32 Секция для контейнера тибального стилуса PERSONA

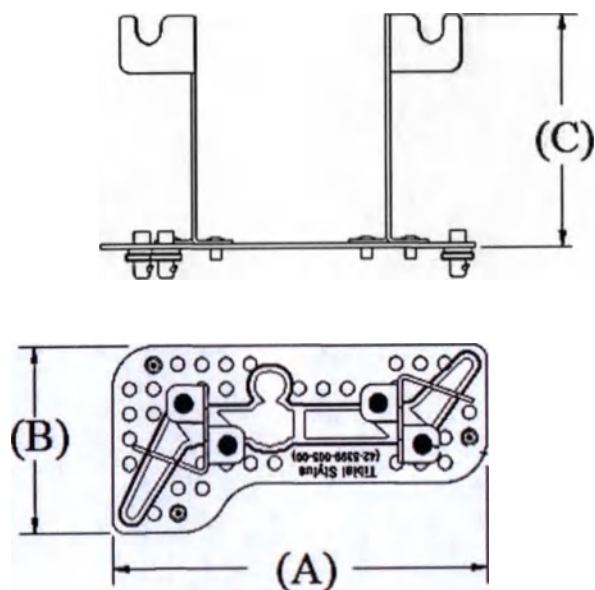

Секция для контейнера тибального стилуса PERSONA	Параметр	A, мм ± 10 , мм	B, мм ± 7 , мм	C, мм ± 7 , мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера тибального стилуса PERSONA		110	54	68	0,025-6,35	76 $\pm$ 12

3.1.92.33 Секция для контейнера адаптера направителя PERSONA

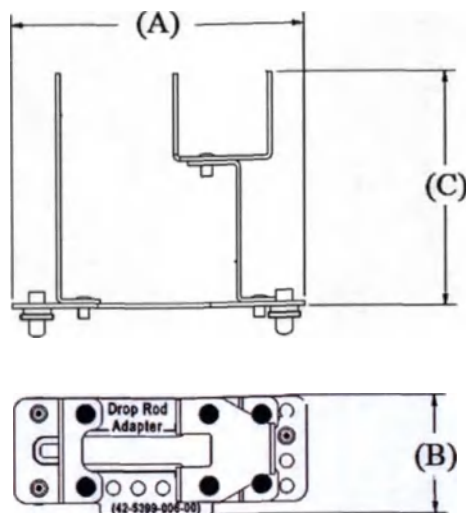

Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±4, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера адаптера направителя PERSONA	85	34	68	0,025-6,35	59±9


3.1.92.34-3.1.92.37 Секция для контейнера опилочного блока PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов правая PERSONA

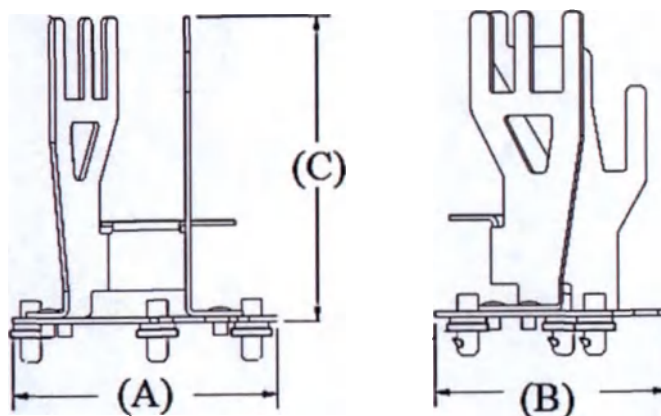

* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера опилочного блока PERSONA	60	52	68	0,025-6,35	47±7

опилочного блока 3 градуса левая PERSONA					
Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса правая PERSONA	60	52	68	0,025-6,35	47±7
Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов левая PERSONA	60	53	68	0,025-6,35	47±7
Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов правая PERSONA	60	53	68	0,025-6,35	47±7

3.1.92.38-3.1.92.46 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 левая PERSONA


Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 правая PERSONA

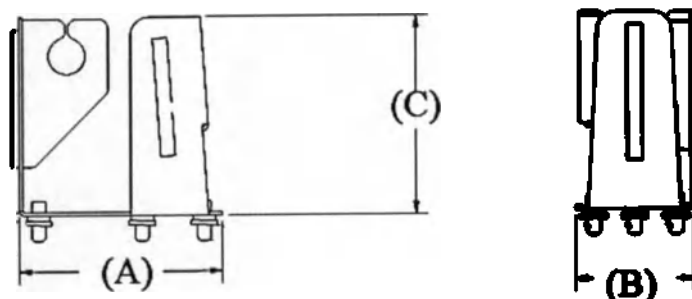

* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS PERSONA					
Секция для контейнера опилочного блока	70	41	68	0,025-6,35	90±15

и примерочного блока PS размера 1-2 левая PERSONA					
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 левая PERSONA	69	44	68	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 правая PERSONA	69	44	68	0,025-6,35	90±15

3.1.92.46-3.1.92.59 Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 4-5 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 12 левая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 правая PERSONA


Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 4-5 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 правая PERSONA

Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 12 правая PERSONA

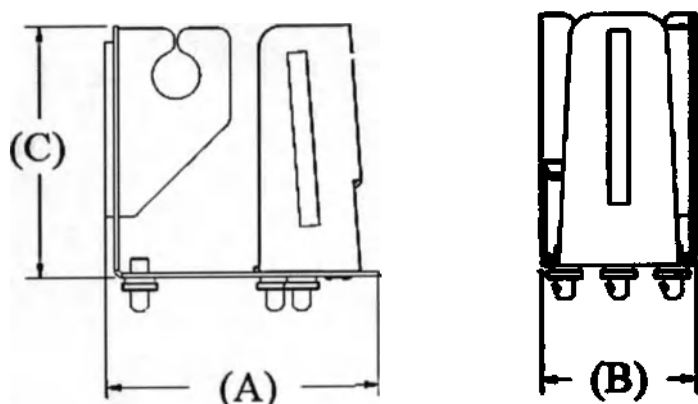


* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм ±7, мм (если не указано иное)	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	50±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	102±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 4-5 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	102±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 12 левая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	50±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	102±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 4-5 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	102±15
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7	70	41	68	0,025-6,35	106±16


правая PERSONA					
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 12 правая PERSONA	70	41	68	0,025-6,35	106±16

3.1.92.60 Секция для контейнера выравнивающего стержня PERSONA

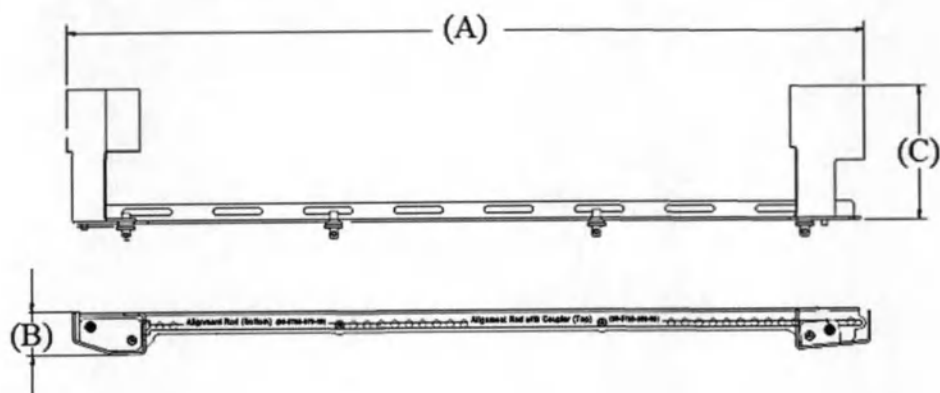



Параметр	A, мм ±15, мм	B, мм ±4, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера выравнивающего стержня PERSONA	413	21	68	0,025-6,35	128±15

3.1.92.61 Секция для контейнера для извлекателя шпилек PERSONA

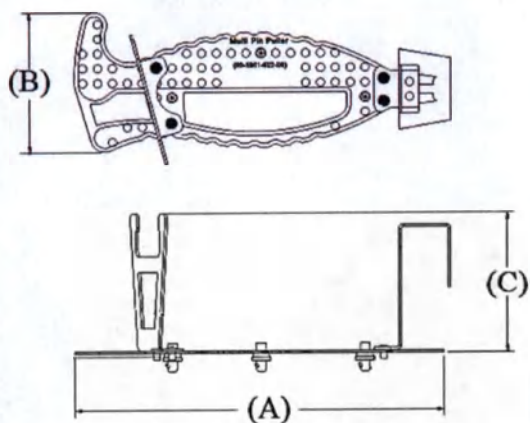

Параметр	A, мм ±12, мм	B, мм ±7, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для извлекателя шпилек PERSONA	178	68	68	0,025-6,35	97±15


3.1.92.62 Секция для контейнера инсертера тибияльного вкладыша PERSONA

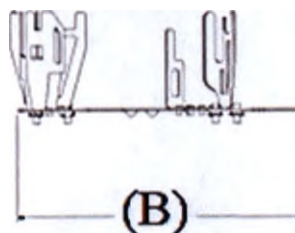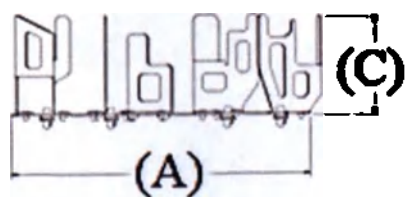

**** размеры А и В определяются габаритами установочной пластины секции

Параметр	А, мм ±12, мм	В, мм ±10, мм	С, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для Контейнера инсерт тибиального вкладыша PERSONA	201	193	67	0,025-6,35	210±30

3.1.92.63 Секция для контейнера сверла 8 мм с разметкой PERSONA

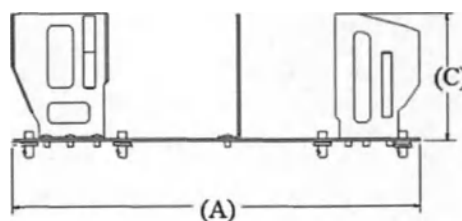

Параметр	А, мм ±12, мм	В, мм ±4, мм	С, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера сверла 8 мм с разметкой PERSONA	219	30	68	0,025-6,35	135±20

3.1.92.64 Секция для контейнера отвертки 2.5 мм PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 1 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 2 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 3 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 4 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 5 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 6 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 7 PERSONA


Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 8 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 9 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 10 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 11 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 12 PERSONA

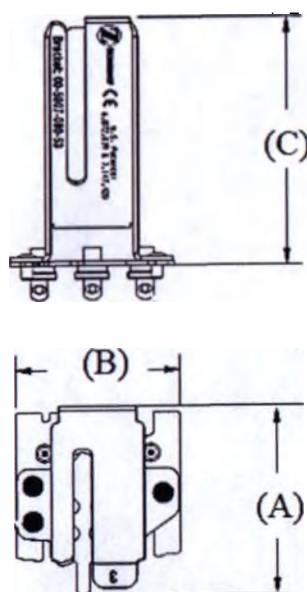

* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм	B, мм	C, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки PERSONA	$\pm 7, \text{ мм}$	$\pm 5, \text{ мм}$	$\pm 7, \text{ мм}$		

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 1 PERSONA	49	44	69	0,025-6,35	66±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 2 PERSONA	49	44	69	0,025-6,35	66±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 3 PERSONA	49	44	66	0,025-6,35	66±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 4 PERSONA	49	46	66	0,025-6,35	70±16
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 5 PERSONA	50	48	66	0,025-6,35	72±18
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 6 PERSONA	51	52	66	0,025-6,35	74±11
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 7 PERSONA	53	52	66	0,025-6,35	81±12
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 8 PERSONA	52	54	66	0,025-6,35	85±13
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 9 PERSONA	52	56	66	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 10 PERSONA	52	58	66	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 11 PERSONA	53	60	66	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 12 PERSONA	53	64	66	0,025-6,35	98±18

3.1.92.78-3.1.92.87 Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 3 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 4 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 5 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 6 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 7 PERSONA


Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 8 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 9 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 10 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 11 PERSONA

Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 12 PERSONA

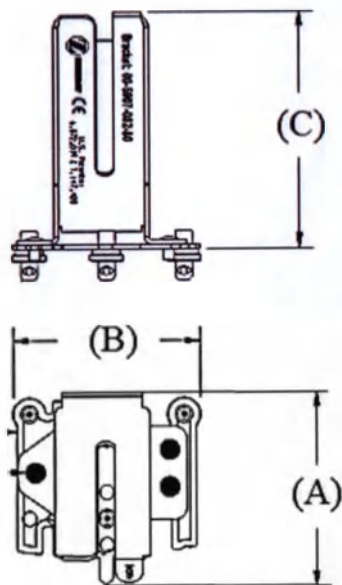


* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм ±7, мм)	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки PERSONA					
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 3 PERSONA	49	44	66	0,025-6,35	66±10
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 4 PERSONA	49	46	66	0,025-6,35	72±11
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 5 PERSONA	50	48	66	0,025-6,35	72±11
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 6 PERSONA	51	52	66	0,025-6,35	74±11
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 7 PERSONA	53	52	66	0,025-6,35	81±12
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 8 PERSONA	52	54	66	0,025-6,35	85±13
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 9 PERSONA	52	56	66	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера	52	58	67	0,025-6,35	90±15

10 PERSONA					
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 11 PERSONA	53	60	66	0,025-6,35	90±15
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 12 PERSONA	53	64	66	0,025-6,35	90±18

3.1.92.88 Секция для контейнера бедренного инсертора/экстрактора PERSONA

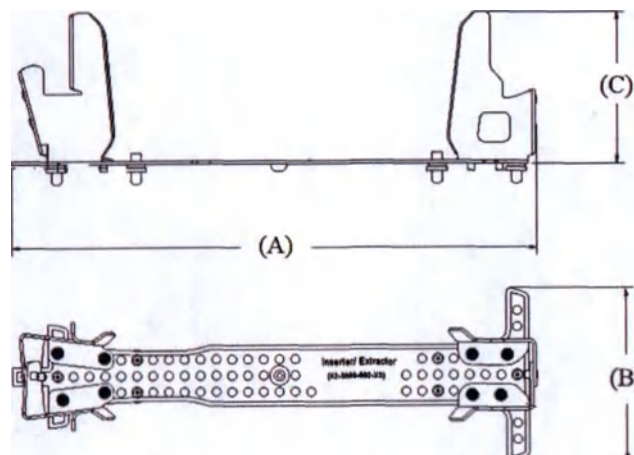

Параметр	A, мм ±10 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера бедренного инсертора/экстрактора PERSONA	237	77	68	0,025-6,35	163±26

3.1.92.89-3.1.92.112 Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 1 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 2 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 3 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 4 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 5 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 6 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 7 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 8 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 9 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 10 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 11 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 12 левая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 1 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 2 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 3 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 4 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 5 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 6 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 7 правая
PERSONA


Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 8 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 9 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 10 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 11 правая
PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 12 правая
PERSONA

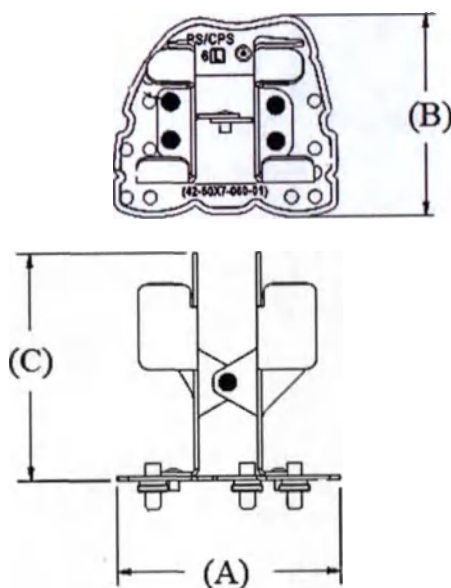



* на рисунке представлен пример секции

**** размеры A и B определяются габаритами установочной пластины секции

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 10 правая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 11 правая PERSONA

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 12 правая PERSONA

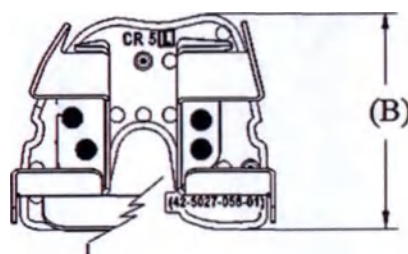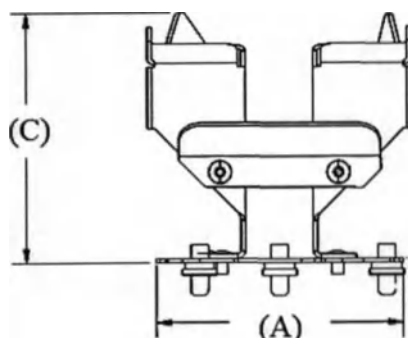

* на рисунке представлен пример секции

**** размеры A и B определяются габаритами установочной пластины секции

Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR PERSONA					
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 1 левая PERSONA	61	52	63	0,025-6,35	82±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 2 левая PERSONA	61	52	63	0,025-6,35	82±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 3 левая PERSONA	63	53	66	0,025-6,35	98±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 4 левая PERSONA	64	56	66	0,025-6,35	101±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 5 левая PERSONA	66	57	67	0,025-6,35	106±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 6 левая PERSONA	68	60	65	0,025-6,35	112±14

Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 7 левая PERSONA	69	62	67	0,025-6,35	118±15
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 8 левая PERSONA	71	64	65	0,025-6,35	124±15
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 9 левая PERSONA	73	66	65	0,025-6,35	131±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 10 левая PERSONA	75	69	65	0,025-6,35	138±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 11 левая PERSONA	77	71	65	0,025-6,35	141±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 12 левая PERSONA	78	75	65	0,025-6,35	145±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 1 правая PERSONA	61	52	63	0,025-6,35	82±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 2 правая PERSONA	61	52	63	0,025-6,35	82±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 3 правая PERSONA	63	53	66	0,025-6,35	98±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 4 правая PERSONA	64	56	66	0,025-6,35	101±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 5 правая PERSONA	66	57	67	0,025-6,35	106±12
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 6 правая PERSONA	68	60	65	0,025-6,35	112±14
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 7 правая PERSONA	69	62	67	0,025-6,35	118±15
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 8 правая PERSONA	71	64	65	0,025-6,35	124±15
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 9 правая PERSONA	73	66	65	0,025-6,35	131±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 10 правая PERSONA	75	69	65	0,025-6,35	138±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 11 правая PERSONA	77	71	65	0,025-6,35	141±17
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 12 правая PERSONA	78	75	65	0,025-6,35	145±17

3.1.92.137-3.1.92.154 Секция для контейнера примерочного тибialного компонента 6 градусов PERSONA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●


●

●

●

●

●

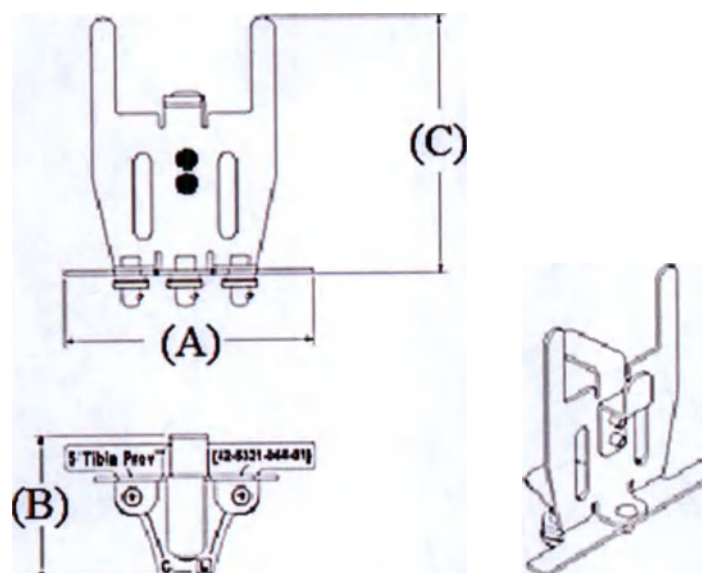

* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов PERSONA					
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер A левая PERSONA	61	36	68	0,025-6,35	40±7
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер B левая PERSONA	63	36	68	0,025-6,35	40±7
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер C левая PERSONA	65	38	68	0,025-6,35	42±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер D левая PERSONA	67	38	68	0,025-6,35	42±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер E левая PERSONA	71	42	68	0,025-6,35	43±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер F левая PERSONA	75	42	68	0,025-6,35	43±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер G левая PERSONA	79	43	68	0,025-6,35	44±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер H левая PERSONA	83	43	68	0,025-6,35	44±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер J левая PERSONA	88	50	68	0,025-6,35	48±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер	61	36	68	0,025-6,35	40±7

A правая PERSONA					
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер B правая PERSONA	63	36	68	0,025-6,35	40±7
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер C правая PERSONA	65	38	68	0,025-6,35	42±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер D правая PERSONA	67	38	68	0,025-6,35	42±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер E правая PERSONA	71	42	68	0,025-6,35	43±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер F правая PERSONA	75	42	68	0,025-6,35	43±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер G правая PERSONA	79	46	68	0,025-6,35	44±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер H правая PERSONA	83	46	68	0,025-6,35	44±5
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер J правая PERSONA	88	50	68	0,025-6,35	48±5

3.1.92.155-3.1.92.164 Секция PS TASP и пластин примерочных для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA


Секция PS TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция PS TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

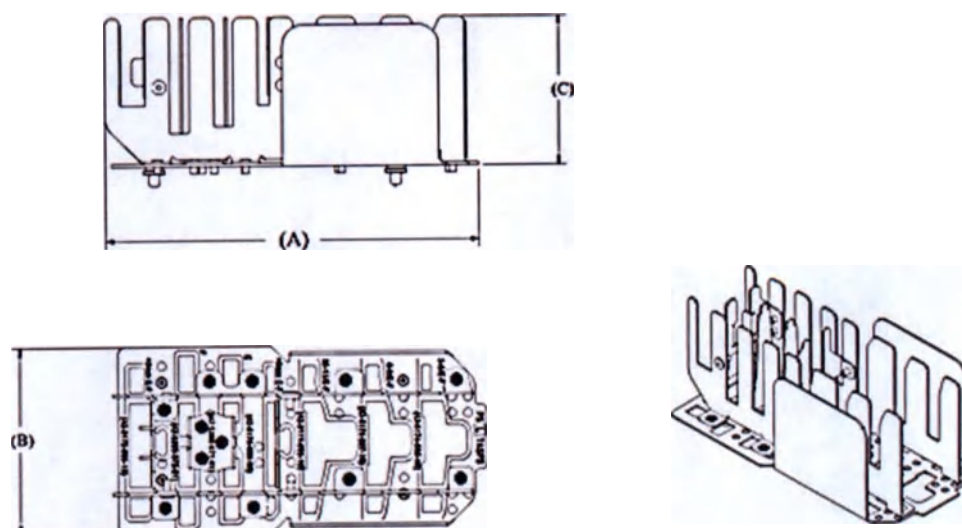

* на рисунке представлен пример секции

Секция PS TASP и пластин примерочных для контейнера для инструментов PERSONA	А, мм ±7, мм	В, мм ±5, мм	С, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция PS TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	137	76	67	0,025-6,35	272±40
Секция PS TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	137	76	67	0,025-6,35	272±40
Секция PS TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	166	82	67	0,025-6,35	353±53
Секция PS TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	137	89	67	0,025-6,35	267±40
Секция PS TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	115	95	67	0,025-6,35	230±47
Секция PS TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	137	76	67	0,025-6,35	272±40
Секция PS TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	135	76	67	0,025-6,35	272±40
Секция PS TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	163	82	67	0,025-6,35	353±53
Секция PS TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	135	89	67	0,025-6,35	267±40
Секция PS TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	115	95	67	0,025-6,35	230±47

3.1.92.165-3.1.92.174 Секция CPS TASP и пластин примерочных для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA


Секция CPS TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CPS TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

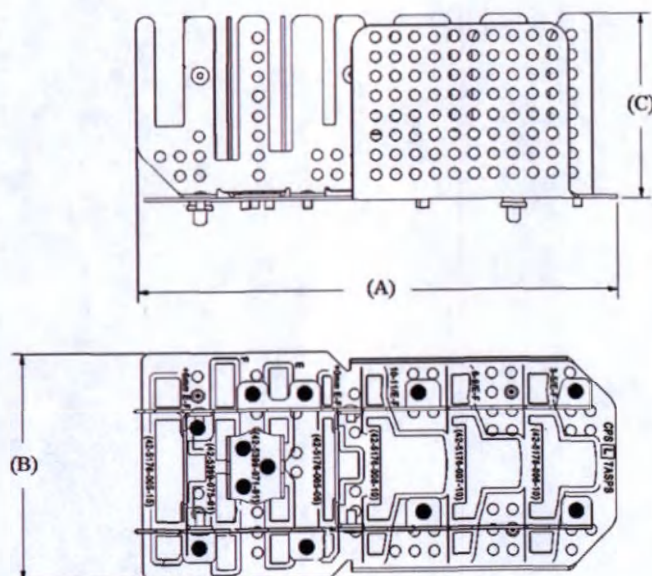

* на рисунке представлен пример секции

Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция CPS TASP и пластин примерочных для контейнера для инструментов PERSONA					
Секция CPS TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	142	76	67	0,025-6,35	265±40

Секция CPS TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	147	76	67	0,025-6,35	270±40
Секция CPS TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	175	82	67	0,025-6,35	350±53
Секция CPS TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	150	89	67	0,025-6,35	278±42
Секция CPS TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	120	95	67	0,025-6,35	236±45
Секция CPS TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	142	76	67	0,025-6,35	265±40
Секция CPS TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	147	76	67	0,025-6,35	270±40
Секция CPS TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	175	82	67	0,025-6,35	350±53
Секция CPS TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	150	89	67	0,025-6,35	278±42
Секция CPS TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	120	95	67	0,025-6,35	236±45

3.1.92.175-3.1.92.184 Секция CR TASP и пластин примерочных для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA


Секция CR TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

Секция CR TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA


Секция CR TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA

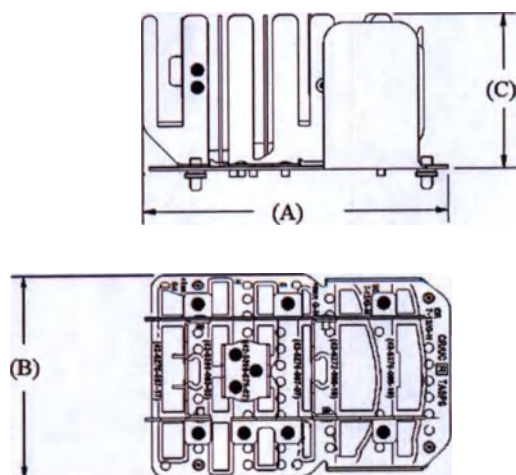

* на рисунке представлен пример секции

Секция CR TASP и пластин примерочных для контейнера для инструментов PERSONA	Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция CR TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA		133	76	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA		133	76	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA		133	82	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA		133	89	67	0,025-6,35	278±42
Секция CR TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA		133	95	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA		133	76	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA		133	76	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA		133	82	67	0,025-6,35	270±40
Секция CR TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA		133	89	67	0,025-6,35	278±42
Секция CR TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA		133	95	67	0,025-6,35	270±40


3.1.92.185 Секция CR TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA

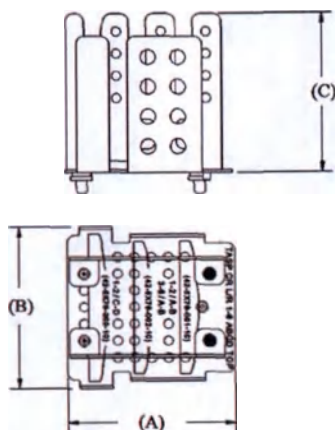

* на рисунке представлен пример секции

Секция CR TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	А, мм ±7 мм	В, мм ±7 мм	С, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция CR TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	71	69	68	0,025-6,35	45±10


3.1.92.186 Секция UC TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA

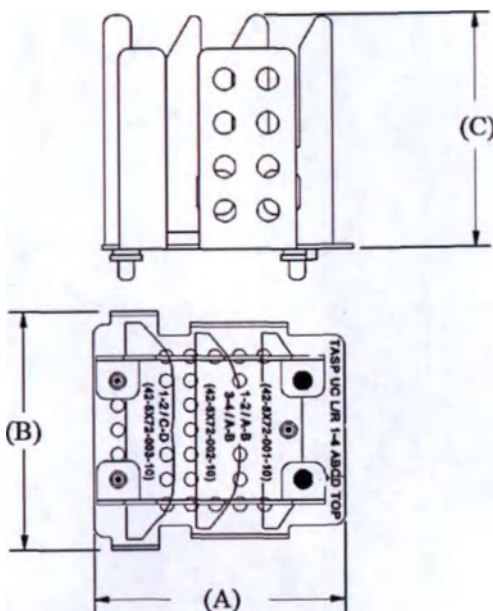

* на рисунке представлен пример обшивки

Секция UC TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция UC TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA		74	69	68	0,025-6,35	45±10


3.1.92.187 Секция PS TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA

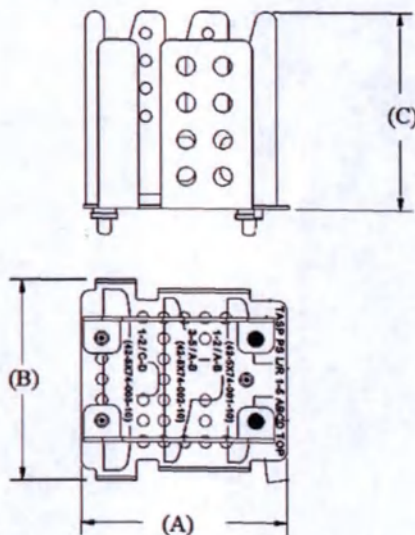

* на рисунке представлен пример секции

Секция PS TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция PS TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA		71	69	68	0,025-6,35	45±10

3.1.92.188 Секция для контейнера прокладок регулировочных 10-14 мм PERSONA

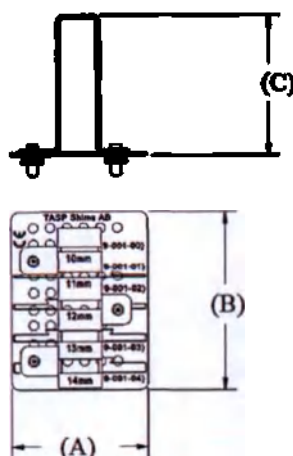


* на рисунке представлен пример секции

Секция для контейнера прокладок регулировочных 10-14 мм PERSONA	Параметр	A, мм ±5 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера прокладок регулировочных 10-14 мм PERSONA		58	76	61	0,025-6,35	42±10

3.1.92.189-3.1.92.198 Секция MC TASP Top для контейнера для инструментов PERSONA

Секция MC TASP Top 1-4/AB левая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 4-9/CD левая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 4-11/EF левая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 8-12/GH левая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 12 /J левая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 1-4/AB правая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 4-9/CD правая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 4-11/EF правая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 8-12/GH правая для контейнера для инструментов PERSONA
 Секция MC TASP Top 12 /J правая для контейнера для инструментов PERSONA

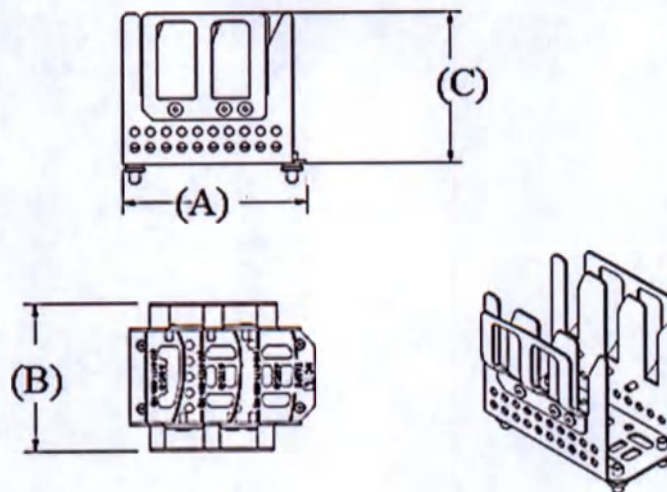

* на рисунке представлен пример секции


Секция MC TASP Тор для контейнера для инструментов PERSONA	Параметр	A, мм ±7, мм	B, мм ±5, мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция MC TASP Тор 1-4/AB левая для контейнера для инструментов PERSONA		62	83	69	0,025-6,35	104±20
Секция MC TASP Тор 4-9/CD левая для контейнера для инструментов PERSONA		84	68	69	0,025-6,35	141±20
Секция MC TASP Тор 4-11/EF левая для контейнера для инструментов PERSONA		84	75	69	0,025-6,35	146±20
Секция MC TASP Тор 8-12/GH левая для контейнера для инструментов PERSONA		62	83	69	0,025-6,35	104±15
Секция MC TASP Тор 12 /J левая для контейнера для инструментов PERSONA		38	93	69	0,025-6,35	73±10
Секция MC TASP Тор 1-4/AB правая для контейнера для инструментов PERSONA		62	83	69	0,025-6,35	104±20
Секция MC TASP Тор 4-9/CD правая для контейнера для инструментов PERSONA		84	68	69	0,025-6,35	141±20
Секция MC TASP Тор 4-11/EF правая для контейнера для инструментов PERSONA		84	75	69	0,025-6,35	146±20
Секция MC TASP Тор 8-12/GH правая для контейнера для инструментов PERSONA		62	83	69	0,025-6,35	104±15
Секция MC TASP Тор 12 /J правая для контейнера для инструментов PERSONA		38	93	69	0,025-6,35	73±10

3.1.92.199-3.1.92.201 Секция для контейнера тибияльного импактора PERSONA

Секция для контейнера тибияльного импактора размер A-D PERSONA

Секция для контейнера тибияльного импактора размер E-F PERSONA


Секция для контейнера тибияльного импактора размер G-J PERSONA

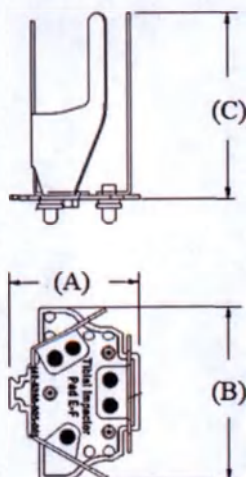

* на рисунке представлен пример секции


Параметр	A, мм ±5 мм)	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера тибиального импактора PERSONA					
Секция для контейнера тибального импактора размер A-D PERSONA	48	57	68	0,025-6,35	45±10
Секция для контейнера тибального импактора размер E-F PERSONA	47	63	68	0,025-6,35	48±10
Секция для контейнера тибального импактора размер G-J PERSONA	47	63	68	0,025-6,35	48±10

3.1.92.202 Секция для контейнера сверла бедренного размера АВ

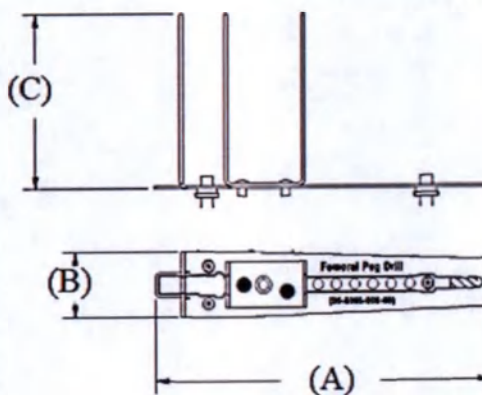


Параметр	A, мм ±10 мм	B, мм ±5 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера сверла бедренного размера АВ					
Секция для контейнера сверла бедренного размера АВ	131	25	68	0,025-6,35	32±7

3.1.92.203 Секция для контейнера интермедуллярного направителя 8 мм PERSONA

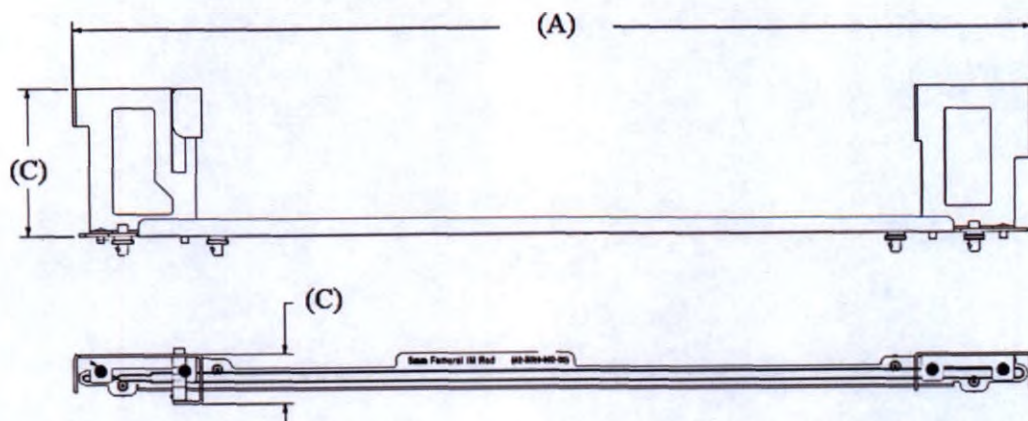

Параметр	A, мм ±15 мм	B, мм ±5 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера интермедуллярного направителя 8 мм PERSONA	435	23	68	0,025-6,35	148±20


3.1.92.204 Секция для контейнера вальгусного регулируемого направителя PERSONA

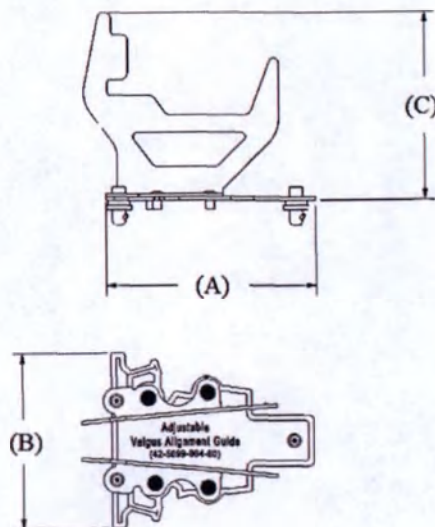

**** размеры A и B определяются габаритами установочной пластины секции

Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера вальгусного регулируемого направителя PERSONA	76	64	68	0,025-6,35	70±10


3.1.92.205 Секция для контейнера дистальной резекционной пластины 9 мм PERSONA

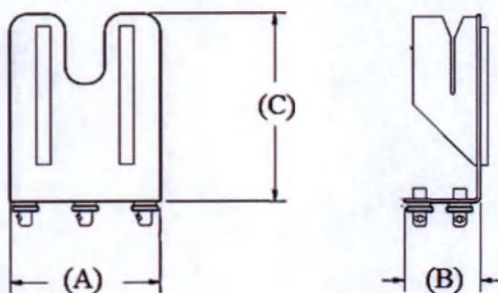

**** размеры A и B определяются габаритами установочной пластины секции


Параметр	A, мм ±5 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера дистальной резекционной пластины 9 мм PERSONA	54	27	68	0,025-6,35	65±10

3.1.92.206 Секция для контейнера направлятеля опилочного блока регулируемого PERSONA

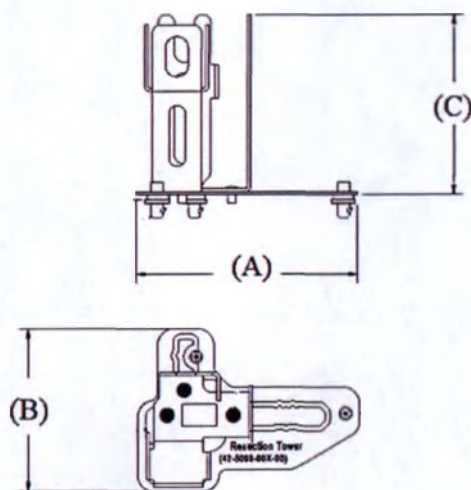


Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера направлятеля опилочного блока регулируемого PERSONA	85	62	68	0,025-6,35	73±10

3.1.92.207 Секция для контейнера дистального опилочного блока PERSONA

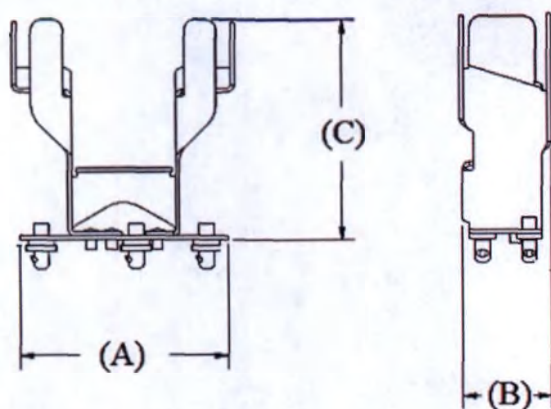


Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±4 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера дистального опилочного блока PERSONA	63	27	68	0,025-6,35	74±10

3.1.92.208 Секция для контейнера рукоятки модульной PERSONA

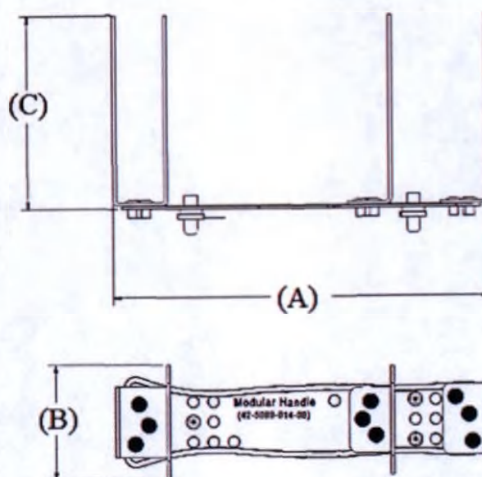


Параметр	A, мм ±10 мм	B, мм ±5 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера рукоятки модульной PERSONA	133	41	68	0,025-6,35	102±12

3.1.92.209 Секция для контейнера отвертки для аугментов PERSONA

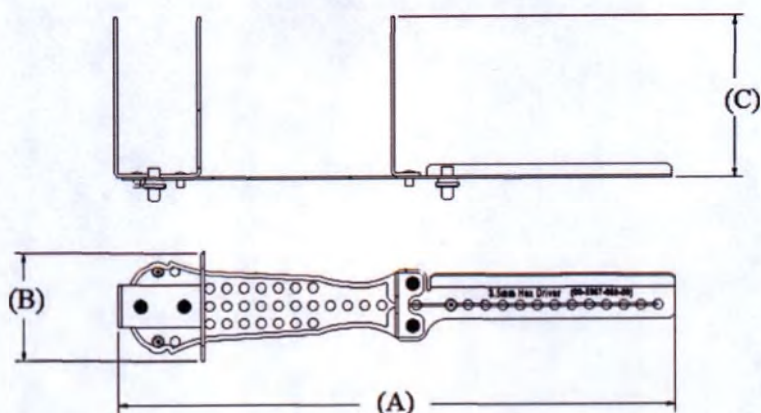


Параметр	A, мм ±15 мм	B, мм ±5 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера отвертки для аугментов PERSONA	231	45	67	0,025-6,35	93±12

3.1.92.210 Секция для контейнера блокирующего винта PERSONA

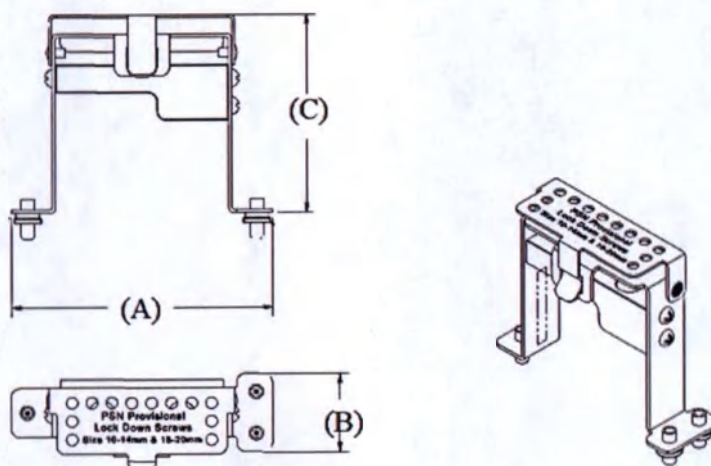


Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±4 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера блокирующего винта PERSONA	90	27	69	0,025-6,35	69±10

3.1.92.211 Секция для контейнера экстрактора тибального PERSONA

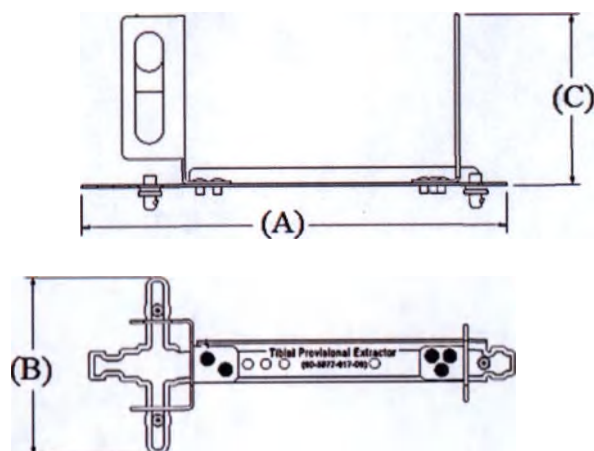

Параметр	A, мм ±10 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера экстрактора тибального PERSONA	168	70	68	0,025-6,35	85±10


3.1.92.212 Секция для контейнера определителя размера задней ориентировки PERSONA

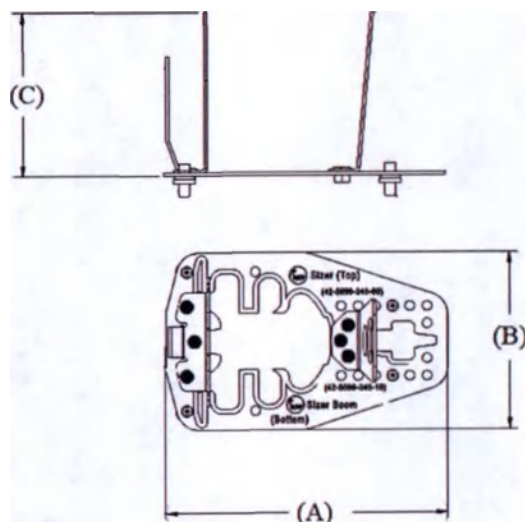

Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±7 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера определителя размера задней ориентировки PERSONA	117	73	68	0,025-6,35	97±10

3.1.92.212-3.1.92.217 Секция для контейнера прокладок регулировочных PERSONA


Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных AB PERSONA
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных CD PERSONA
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных EF PERSONA
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных GH PERSONA
 Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных J PERSONA

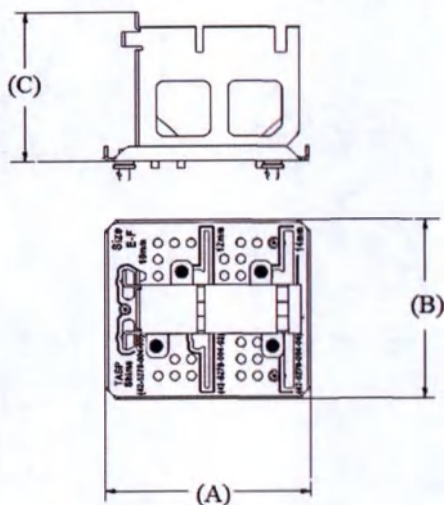

* на рисунке представлен пример секции


Параметр	A, мм ± 7 мм)	B, мм ± 7 мм	C, мм ± 7 , мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера прокладок регулируемых PERSONA					
Секция для контейнера прокладок регулируемых ограниченных AB PERSONA	87	75	68	0,025-6,35	137 $\pm$ 12
Секция для контейнера прокладок регулируемых ограниченных CD PERSONA	89	77	68	0,025-6,35	141 $\pm$ 12
Секция для контейнера прокладок регулируемых ограниченных EF PERSONA	89	77	68	0,025-6,35	141 $\pm$ 12
Секция для контейнера прокладок регулируемых ограниченных GH PERSONA	89	86	68	0,025-6,35	147 $\pm$ 15
Секция для контейнера прокладок регулируемых ограниченных J PERSONA	94	89	70	0,025-6,35	149 $\pm$ 15

3.1.92.218 Секция для контейнера позиционера опилочного блока PERSONA

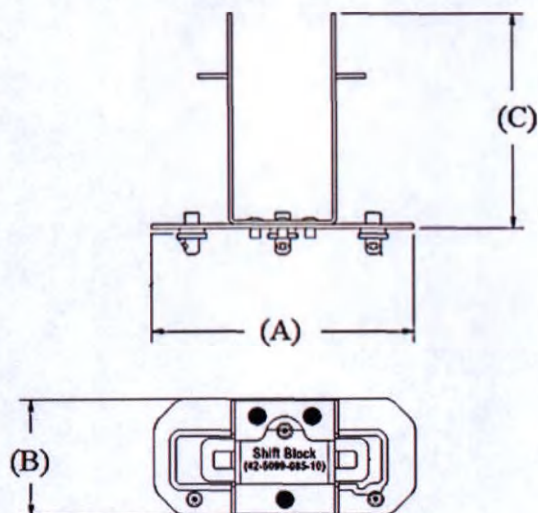


Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±5 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера позиционера опилочного блока PERSONA	83	37	68	0,025-6,35	68±10

3.1.92.219 Секция для контейнера ограничителя цементной мантии PERSONA

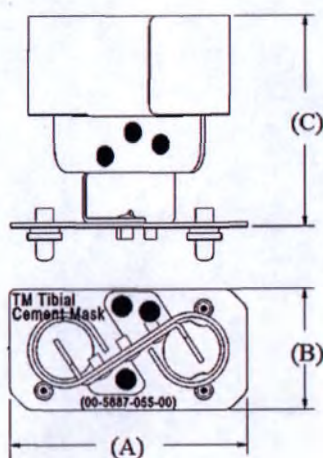

Параметр	A, мм ±7 мм	B, мм ±5 мм	C, мм ±7, мм	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Секция для контейнера ограничителя цементной мантии PERSONA	64	32	57	0,025-6,35	70±10

3.1.92.220 Инструмент для снятия секции

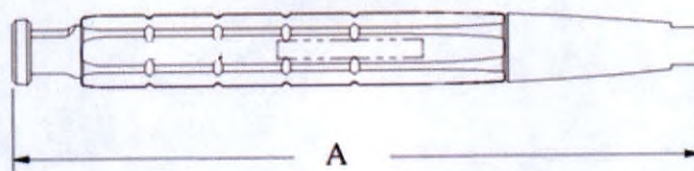

Параметр Инструмент для снятия секции	A, мм ± 5 мм	Твердость	Шероховатость поверхности Ra, мкм	Масса, г
Инструмент для снятия секции	144	R/C 20-56	0,025-6,35	81,2 $\pm$ 10

4. Материалы (описание материалов, включая материалы, вступающие в контакт с организмом пациента)

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Блок опилочный дистальный PERSONA 0 градусов	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель вальгусный выравнивающий регулируемый бедренный PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 4 градуса	Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2/3/4
Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 5 градусов	Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2/3/4
Направитель вальгусный выравнивающий бедренный PERSONA 6 градусов	Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2/3/4
Направитель опилочного блока фиксированный PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 2/3/4
Направитель опилочного блока регулируемый PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Стержень интрамедуллярный PERSONA 8 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Рукоятка модульная PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 1 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и) 302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 2 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и) 302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и)	Тип упаковки 2/3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	
Пластина резекционная дистальная PERSONA 3 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 4 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 5 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 6 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 7 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 8 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Пластина резекционная дистальная PERSONA 9 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 440C или (и)302 или 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Тип упаковки 2/3
Молоток скользящий PERSONA	Нержавеющая сталь 13-8 Мо PH Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 4

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Определитель размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки	Нержавеющая сталь 17-4 PH покрытие отдельных деталей - алюмонитрид титана (AlTiN) Нержавеющая сталь 440C или (и) 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки ¾
Штанга определителя размера компонента бедренного PERSONA, задней ориентировки	Нержавеющая сталь 17-4 PH покрытие отдельных деталей - алюмонитрид титана (AlTiN)	Тип упаковки 1
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, задней ориентировки, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный PERSONA PS, размер 1-2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный PERSONA PS, размер 3-5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный PERSONA PS, размер 6-9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный PERSONA PS, размер 10-12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Позиционер опилочного блока PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 302 или (и)	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	303 или (и) 17-7 PH	
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок опилочный 4-в-1 PERSONA, передней ориентировки, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Определитель размера компонента бедренного PERSONA, передней ориентировки	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440 C Политетрафторэтилен (Тефлон)	Тип упаковки ¾
Определитель размера компонента бедренного со штангой блокирующей PERSONA, передней ориентировки	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 4
Инserter/Экстрактор бедренный PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и)	Тип упаковки 8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	
Прокладка импактора бедренного PERSONA PS	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Прокладка импактора бедренного PERSONA CR	Полифенилсульфон Radel Цвет: черный BK937	Тип упаковки 2
Инсертер вкладыша тибиального PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 17-7 PH Нержавеющая сталь 18-8 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440 C Нержавеющая сталь 455	Тип упаковки 3
Направитель проксимальный PERSONA EM	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь Nitronic 60 Нержавеющая сталь 17-7 PH или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	Тип упаковки 3
Стержень дистальный PERSONA EM	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 18-8 Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 17-7 PH или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	Тип упаковки 3
Струбцина для лодыжки PERSONA EM	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Стилус тибиальный PERSONA EM 2/10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь Nitronic 60 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 17-7 PH или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	Тип упаковки 3
Адаптер стержня PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Рукоятка для пластины примерочной тибиальной PERSONA	Нержавеющая сталь 13-8 Мо PH Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302	Тип упаковки 3
Направитель сверла тибиального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер A-B	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Рашпиль для компонента тибиального цементируемого PERSONA, размер C-D	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Рашпиль для компонента тибиаьного цементируемого PERSONA, размер E-F	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Рашпиль для компонента тибиаьного цементируемого PERSONA, размер G-H	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Рашпиль для компонента тибиаьного цементируемого PERSONA, размер J	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Рукоятка инсертора/экстрактора рашпиля тибиаьного PERSONA	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 440C Магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni)	Тип упаковки 3
Блок опилочный тибиаьный универсальный PERSONA 3 градуса	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Блок опилочный тибиаьный универсальный PERSONA 7 градусов	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Блок опилочный тибиаьный PERSONA левый 3 градуса	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Блок опилочный тибиаьный PERSONA левый 7 градусов	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Блок опилочный тибиаьный PERSONA правый 3 градуса	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Блок опилочный тибиаьный PERSONA правый 7 градусов	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиаьная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер A	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиаьная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер A	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиаьная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер B	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиаьная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер B	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиаьная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер C	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиаьная для компонента	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
цементируемого PERSONA, правая, размер С		
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер D	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер D	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер E	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер E	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер F	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер F	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер G	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер G	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер H	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер H	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, левая, размер J	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Пластина примерочная тибиальная для компонента цементируемого PERSONA, правая, размер J	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Спейсер PERSONA FuZion левый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 455 Магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni) Нержавеющая сталь 17-7 PH или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	Тип упаковки 3
Спейсер PERSONA FuZion правый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 455 Магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni) Нержавеющая сталь 17-7 PH или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 16 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 18 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion левая 20 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 16 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 18 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина корректирующая PERSONA FuZion правая 20 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Натяжитель бедренный PERSONA FuZion левый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 4/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Натяжитель бедренный PERSONA FuZion правый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 4/8
Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion левый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Натяжитель тибиальный PERSONA FuZion правый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 302 или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Пластина бедренная PERSONA FuZion левая +0 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина бедренная PERSONA FuZion правая +0 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Пластина бедренная PERSONA FuZion +9 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 17-7 PH Магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni)	Тип упаковки 3
Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 левый	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Адаптер PERSONA FuZion 4-в-1 правый	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла PERSONA FuZion	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Стилус для определителя размера PERSONA FuZion, задней ориентировки	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, левый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 455 магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni) Нержавеющая сталь 17-7 PH или (и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	Тип упаковки 3
Направитель сверла для определителя размера (задней ориентировки) PERSONA FuZion, правый	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C Нержавеющая сталь 455 магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni) Нержавеющая сталь 17-7 PH или	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	(и) 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 308L или (и) 303 или (и) 302	
Блок примерочный PERSONA PS узкий левый, размер 1-2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS узкий правый, размер 1-2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 3-5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 3-5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 6-9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 6-9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS левый, размер 10-12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS правый, размер 10-12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий левый, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS узкий правый, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
бедренный PERSONA PS правый, размер 6		
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS левый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS правый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
левый, размер 3		
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS левый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA PS-CPS правый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий левый, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий правый, размер 1	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий левый, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR узкий правый, размер 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 4	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 6	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 8	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
бедренный PERSONA CR правый, размер 8		
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 10	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR левый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Компонент примерочный бедренный PERSONA CR правый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS узкий левый, размер 1- 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS узкий правый, размер 1- 2	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 3	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 4-5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 4-5	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 6-7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 6-7	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 8-9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 8-9	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 10-11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 10-11	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Блок примерочный PERSONA PS-CPS левый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Блок примерочный PERSONA PS-CPS правый, размер 12	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер AB (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер AB (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер CD (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер CD (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер EF (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер EF (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер GH (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер GH (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер J (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA левый, размер J (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер AB (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер AB (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер CD (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер CD (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер EF (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер EF (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер GH (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер GH (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер J (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA правый, размер J (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер AB (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер AB (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер CD (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер CD (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер EF (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер EF (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер GH (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер GH (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер J (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный левый, размер J (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер AB (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер CD (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер CD (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер EF (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер EF (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер GH (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер GH (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер J (нижний +0 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA ограниченный правый, размер J (нижний +6 мм)	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-6/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 3-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 7-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR левый, размер 9-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 1-2/AB , верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-6/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 3-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 7-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CR правый, размер 9-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-4/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 3-7/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 4-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC левый, размер 7-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный	Полифенилсульфон Radel	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
тибиальный PERSONA UC левый, размер 9-12/J, верхний	Цвет: серый – GY1037	
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 3-4/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 3-7/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 4-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 7-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA UC правый, размер 9-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 3-4/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 4-5/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 6-7/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 4-5/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 6-7/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 8-11/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC левый, размер 12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 3-4/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 4-5/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 6-7/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 4-5/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 6-7/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 8-11/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA MC правый, размер 12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
левый, размер 3-5/CD, верхний		
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 3-5/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 10-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 6-9/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 10-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS левый, размер 10-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 3-5/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 10-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 6-9/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 10-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA PS правый, размер 10-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-9/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 3-5/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-9/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 6-9/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS левый, размер 10-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 1-2/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/AB, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 1-2/CD, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/CD , верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-9/CD , верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337 или YL130	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 3-5/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-9/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-11/EF, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007 или GN1140	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 6-9/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-12/GH, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный тибиальный PERSONA CPS правый, размер 10-12/J, верхний	Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Тип упаковки 2
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер AB толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
ГН толщина 13 мм		
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер ГН толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер J толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер J толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер J толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер J толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA, размер J толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер АВ толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер АВ толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер АВ толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер АВ толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер АВ толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие	Тип упаковки 2/3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
тибиального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер CD толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер EF толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер GH толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер J толщина 10 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер J толщина 11 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер J толщина 12 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер J толщина 13 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Прокладка регулировочная вкладыша примерочного тибиального PERSONA ограниченного, размер J толщина 14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нитрид-титановое покрытие Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 440C	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер A	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер A	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер B	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер B	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер C	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер C	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер D	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер D	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер E	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер E	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер F	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер F	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер G	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер G	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер H	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер H	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов левый, размер J	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Компонент примерочный тибиальный цементируемый PERSONA 5 градусов правый, размер J	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316 или (и) 316L	Тип упаковки 2/3
Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA 10-14 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Винт примерочный нижний блокирующий PERSONA 16-20 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Ножка удлиняющая примерочная PERSONA, диаметр 14 мм, добавочная длина 30 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Отвертка шестигранная PERSONA 2.5 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 455 Магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni)	Тип упаковки 1
Сверло тибальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм	Нержавеющая сталь 455	Тип упаковки 1
Ограничитель сверла тибиального для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 455 Нержавеющая сталь 316 или (и) 301 или (и) 304 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 17-7 PH	Тип упаковки 2
Сверло тибальное для ножки удлиняющей PERSONA (14x30мм), диаметр 15.7 мм	Нержавеющая сталь 455	Тип упаковки 1
Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Сверло для отверстий под винты MG II, диаметр 3.2 мм	Нержавеющая сталь 13-8 Mo PH	Тип упаковки 1
Стержень выравнивающий	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Стержень выравнивающий с муфтой	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Извлекатель шпилек NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Присадочная проволока (нержавеющая сталь)	Тип упаковки 3
Рукоятка быстроразъемная NexGen	Нержавеющая сталь 13-8 Mo PH Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 316	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 440 С Присадочная проволока (нержавеющая сталь) Покрытие отдельных деталей - алюмонитрид титана (AlTiN)	
Адаптер выравнивающий NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH Присадочная проволока (нержавеющая сталь)	Тип упаковки 2
Блок резекционный NexGen повторного вальгусного среза 2 градуса	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Блок резекционный NexGen повторного варусного среза 2 градуса	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2
Направитель остеотомии надколенника NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 17-7 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 455 Покрытие (отдельных деталей)- алюмонитрид титана (AlTiN) Присадочная проволока (нержавеющая сталь) Политетрафторэтилен (Тефлон)	Тип упаковки 3
Зажим надколенника NexGen	Нержавеющая сталь 13-8 Mo PH Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 455 Присадочная проволока (нержавеющая сталь) Покрытие (отдельных деталей)- алюмонитрид титана (AlTiN)	Тип упаковки 4/8
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 26	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 29	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 32	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 35	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 38	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Направитель сверла надколенника со штифтом NexGen, размер 41	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Штангенциркуль для бедренного компонента NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Шаблон примерочный	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 2

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
надколенника NexGen	Нержавеющая сталь 302 Присадочная проволока (нержавеющая сталь)	
Сверло бедренное NexGen, размер A,B	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 26 мм толщина 7.5 мм	Полиэфиримидная смола ULTEM, цвет: серый - HU1000-7H7D436	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 29 мм толщина 8.0 мм	Полиэфиримидная смола ULTEM, цвет: серый - HU1000-7H7D436	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 32 мм толщина 8.5 мм	Полиэфиримидная смола ULTEM, цвет: серый - HU1000-7H7D436	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 35 мм толщина 9.0 мм	Полиэфиримидная смола ULTEM, цвет: серый - HU1000-7H7D436	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 38 мм толщина 9.5 мм	Полиэфиримидная смола ULTEM, цвет: серый - HU1000-7H7D436	Тип упаковки 2
Вкладыш примерочный надколенника All-Poly NexGen, размер 41 мм толщина 10.0 мм	Полиэфиримидная смола ULTEM, цвет: серый - HU1000-7H7D436	Тип упаковки 2
Экстрактор ножки примерочной тибиальной NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 3
Шпилька фиксирующая с короткой головкой NexGen 25 мм	Нержавеющая сталь 13-8 Mo PH	Тип упаковки 1
Направитель резекционный тибиальный NexGen толщина 1.27 мм (0.050 дюймов).	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1/3/6
Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Блок примерочный MIS Quad- Sparing, размер 10 мм	Ацеталь сополимер Ticona Celcon M25 acetal (полиоксиметилэтилен), цвет: серый - CC 34031	Тип упаковки 2
Блок примерочный MIS Quad- Sparing, размер 12 мм	Ацеталь сополимер Ticona Celcon M25 acetal (полиоксиметилэтилен), цвет: серый - CC 34031	Тип упаковки 2
Блок примерочный MIS Quad- Sparing, размер 14 мм	Ацеталь сополимер Ticona Celcon M25 acetal (полиоксиметилэтилен), цвет: серый - CC 34031	Тип упаковки 2
Отвертка торсионная шестигранная NexGen 2.0 мм	Нержавеющая сталь 440 A или Нержавеющая сталь 455	Тип упаковки 1/3
Стержень бедренный интрамедуллярный NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1
Рукоятка Т-образная модульная NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 покрытие отдельных деталей - алюмонитрид титана (AlTiN) Присадочная проволока	Тип упаковки 3

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	(нержавеющая сталь)	
Направитель бедренный выравнивающий вальгусный NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 440A Нержавеющая сталь 440C Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2 Присадочная проволока (нержавеющая сталь) покрытие отдельных деталей - алюмонитрид титана (AlTiN) Нержавеющая сталь 17-7 PH	Тип упаковки 4/8
Блок резекционный бедренный дистальный NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 440C Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2 покрытие отдельных деталей - алюмонитрид титана (AlTiN) Нержавеющая сталь 17-7 PH	Тип упаковки 4/8
Блок опилочный фиксированный/без фиксации 0 градусов NexGen	Нержавеющая сталь 17-4 PH	Тип упаковки 1/2/3/4
Принадлежности		
Контейнер для инструментов одноуровневый	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 304 или (и) 430	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов малый (1/2)	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 304 или (и) 430 Нержавеющая сталь 17-7 PH	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов основной	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и) 303 или (и) 304 или (и) 430	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов основной малый (1/2)	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и) 303 или	Тип упаковки 8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	(и)304 или (и) 430	
Контейнер для шпилек	Нержавеющая сталь 304 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Контейнер для инструментов тибиальный основной PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: серый	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов бедренный основной PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: черный	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов для надколенника PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 18-8 Эпоксидная смола Nazdar, синяя Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов CR/UC правых PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий	Тип упаковки 8
Контейнер для инструментов CR/UC левых PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий	Тип упаковки 8
Панель съемная для контейнера для инструментов с линиями	Нержавеющая сталь 304	Тип упаковки 7
Панель съемная для контейнера для инструментов	Нержавеющая сталь 304	Тип упаковки 7
Панель съемная для контейнера для инструментов прямоугольная с линиями	Нержавеющая сталь 304	Тип упаковки 7
Поддон для инструментов 101.6 мм	Нержавеющая сталь 304 полифенилсульфон Radel R, цвет: серый - GY1037 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 316	Тип упаковки 8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий Эпоксидная смола Nazdar, синяя	
Крышка контейнера для инструментов базовая	Полифенилсульфон Radel R, цвет: синий - BU391 Нержавеющая сталь 302 Эпоксидная смола Nazdar, белая	Тип упаковки 8
Крышка контейнера для инструментов основная	Полифенилсульфон Radel R, цвет: синий - blue 647C Полифенилсульфон Radel R, цвет: серый Эпоксидная смола Nazdar, белая	Тип упаковки 8
Крышка контейнера для инструментов малая (1/2)	Полифенилсульфон Radel R, цвет: синий - blue 647C Полифенилсульфон Radel R, цвет: серый Эпоксидная смола Nazdar, белая	Тип упаковки 8
Секция для контейнера сверел 15,7 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для рашпелей A-B PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для рашпелей C-D PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для рашпелей E-F PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для рашпелей G-H PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для рашпелей J PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для инструментов передней ориентировки PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	Тип упаковки 5/8
Секция Вальгус/Варус для контейнера для инструментов	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 18-8 или (и)	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
PERSONA	301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Эпоксидная смола Nazdar, синяя	
Секция для контейнера спейсеров 10 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера спейсеров 12 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера спейсеров 14 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для проксимального направителя EM PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для дистального стержня EM PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для трубины для лодыжки EM PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера тибиального стиулуca PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера адаптера PERSONA направителя	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока 3 градуса правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока 7 градусов правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и)	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 1-2 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 3-5 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 6-9 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS размера 10-12 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
примерочного блока PS-CPS размера 4-5 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 12 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 1-2 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 3 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 4-5 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 6-7 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 8-9 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 10-11 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера опилочного блока и примерочного блока PS-CPS размера 12 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера выравнивающего стержня PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для извлекателя шпилек PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера инсертера тибияльного вкладыша PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера сверла 8 мм с разметкой PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера отвертки 2.5 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Силиконовая резина, цвет: черный	
Секция для контейнера рукоятки быстросъемной PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
#N/A	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
#N/A	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 3 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 4 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 5 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 6 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 7 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 8 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 9 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 10 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 11 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 передней ориентировки размера 12 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 3 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 4 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 5 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 6 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 7 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 8 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 9 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
ориентировки размера 10 PERSONA	Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 11 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера для опилочного блока 4-в-1 задней ориентировки размера 12 PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера бедренного инсертатора/экстрактора PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 1 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 2 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 3 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 4 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 5 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 6 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 7 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 8 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 9 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 10 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и)	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 11 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 12 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 1 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 2 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 3 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 4 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных PS бедренных компонентов размер 5 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 6 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 7 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 8 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 9 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 10 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 11 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов PS размер 12	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
правая PERSONA	Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 1 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 2 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 3 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 4 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 5 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 6 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера	Нержавеющая сталь 304	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
примерочных бедренных компонентов CR размер 7 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 8 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 9 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 10 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 11 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 12 левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 1 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	(и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 2 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 3 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 4 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 5 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 6 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 7 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 8 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 9 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 10 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 11 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочных бедренных компонентов CR размер 12 правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибияльного компонента 5 градусов размер А левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибияльного компонента 5 градусов размер В левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибияльного компонента 5 градусов размер С левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер D левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер E левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер F левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер G левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер H левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер J левая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
компонента 5 градусов размер A правая PERSONA	Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер B правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер C правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер D правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер E правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер F правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер G правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер H правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера примерочного тибального компонента 5 градусов размер J правая PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и)	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция PS TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция PS TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция CPS TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP AB и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CPS TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
PERSONA	Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция CPS TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP AB и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP CD и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP EF и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP GH и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP J и пластин примерочных левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP AB и пластин	Нержавеющая сталь 304	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция CR TASP CD и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP EF и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP GH и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP J и пластин примерочных правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция CR TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция UC TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	(и)304 или (и) 430	
Секция PS TASP ABCD и пластин примерочных левая/правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера прокладок регулировочных 10- 14 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 1-4/AB левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 4-9/CD левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 4-11/EF левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 8-12/GH левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 12 /J левая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 1-4/AB правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Top 4-9/CD правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Секция MC TASP Тор 4-11/EF правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Тор 8-12/GH правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция MC TASP Тор 12 /J правая для контейнера для инструментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера тибияльного импактора размер A-D PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера тибияльного импактора размер E-F PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера тибияльного импактора размер G-J PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера сверла бедренного размера AB	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера интермедуллярногонаправителя 8 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
Секция для контейнера вальгусного регулируемого направителя PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера дистальной резекционной пластины 9 мм PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Силиконовая резина, цвет: черный	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера направителя опилочного блока регулируемого PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера дистального опилочного блока PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера рукоятки модульной PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера отвертки для аугментов PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера блокирующего винта PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430 Полипропилен Propylux, цвет:белый	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера экстрактора тиббиального PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера определителя размера задней ориентировки PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных AB PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных CD PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных EF PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных GH PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера прокладок регулировочных ограниченных J PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Секция для контейнера позиционера опилочного блока PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302	Тип упаковки 5/8

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП УПАКОВКИ
	Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	
Секция для контейнера ограничителя цементной мантии PERSONA	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 303 Нержавеющая сталь 302 Нержавеющая сталь 301 Нержавеющая сталь 430 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 18-8 или (и) 301 или (и) 302 или (и)303 или (и)304 или (и) 430	Тип упаковки 5/8
Инструмент для снятия секции	Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 316 Алюминиевый сплав 6061-T6, анодирование, цвет: голубой	Тип упаковки 1

Ни одно из упомянутых изделий не включает в себя и не является средством введения лекарственных средств.

Ни одно из упомянутых изделий не включает в себя препаратов человеческой крови.

Ни одно из упомянутых изделий не было произведено с использованием органов, тканей и клеток человека или животных.

Функциональное назначение изделий не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

Химический анализ Нержавеющая сталь 17-4 PH (ASTM F899, ASTM A747):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Nb и Ta	Fe
соотношения элементов в %	0,07 (+0.01)	1.0 (+0.03)	0,040 (+0.005)	0,030 (+0.005)	1.0 (+0.05)	15,00- 17,50 (±0.20)	3,0-5,0 (±0.07)	3,0-5,0 (±0.15)	0,15- 0,45 (±0.05)	осно ва

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 455 (ASTM F899, ASTM A564):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	Nb и Ta	Fe
соотношени я элементов в %	0.030 (±0.005)	0.50 (±0.03)	0.015 (±0.005)	0.015 (±0.005)	0.50 (±0.05)	11.00- 12.50 (±0.15)	7.50- 9.50 (±0.10)	1.50- 2.50 (±0.10)	0.90- 1.40 (±0.05)	0.50 (±0.03)	0.10- 0.50 (±0.10)	основ а

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 302 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	N	Fe
соотношения элементов в %	0,15 (±0.01)	2 (±0.04)	0,045 (±0.01)	0,030 (±0.005)	1 (±0.05)	17,00-19,00 (±0.20)	8,00-10,00 (±0.10)	0.10 (±0.010)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Стали Нержавеющая сталь 17-7 PH (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Al	Fe
соотношения элементов в %	0,09 (+0.01)	1.0 (+0.03)	0,040 (+0.005)	0,030 (+0.005)	1.0 (+0.05)	16,00- 18,00 (±0.20)	6.50- 7.75 (±0.10)	0.75- 1.50 (±0.10)	основ а

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Стали Нержавеющая сталь 18-8 (ASTM A480, ASTM A484, ASTM A555, ASTM A580):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Fe
соотношения элементов в %	0,15 (+0.01)	2.0 (+0.10)	0,020 (+0.01)	0,15 (+0.01)	1.0 (+0.05)	16,00- 20,00 (±0.20)	8,0-13,0 (±0.15)	основ а

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 440C (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Mo	Fe
соотношения элементов в %	0.95-1.20 (±0.03)	1 (±0.03)	0.040 (±0.005)	0.030 (±0.005)	1.00 (±0.05)	16.00-18.00 (±0.20)	0.75 (±0.05)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 316 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	N	Fe
соотношения элементов в %	0.070 (±0.01)	2.00 (±0.04)	0.045 (±0.01)	0.03 (±0.005)	1.00 (±0.05)	16.00- 18.00 (±0.20)	10.00- 13.50 (±0.15)	2.00- 2.50 (±0.10)	0.10 (±0.01)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 304 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	N	Fe
соотношения элементов в %	0.08 (±0.01)	2.00 (±0.04)	0.045 (±0.010)	0.030 (±0.005)	1.00 (±0.05)	18.00- 20.00 (±0.20)	8.00- 11.00 (±0.15)	0.10 (±0.01)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 308L:

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	P	S	N	Cu
соотношения элементов в %	0.030	19.5-22.0	9.0-11.0	0.75	1.0-2.5	0.30-0.65	0.03	0.03	-	0.75

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 13-8 Mo PH (ASTM A564):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Al	Mo	N	Fe
соотношения элементов в %	0.05 (±0.01)	0.10 (±0.03)	0.01 (±0.005)	0.008 (±0.005)	0.10 (±0.05)	12.25- 13.25 (±0.15)	7.50- 8.50 (±0.10)	0.90-1.35 (±0.10)	2.00- 2.50 (±0.10)	0.01 (±0.005)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 301 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Fe
соотношения элементов в %	0.15 (±0.01)	2.00 (±0.04)	0.045 (±0.01)	0.030 (±0.005)	1.00 (±0.05)	16.00- 18.00 (±0.20)	6.00- 8.00 (±0.10)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 303 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Fe
соотношения элементов в %	0.12 (±0.01)	2.00 (±0.04)	0.060 (±0.010)	0.15-0.35 (±0.020)	1.00 (±0.05)	17.00-19.00 (±0.20)	8.00-10.00 (±0.10)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ сплава AlNiCo8:

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	Al	Ni	Co	Cu	Ti	S	Si	Nb	Fe
соотношения элементов в %	7-13 (±10)	13.2-26 (±10)	5-35.1 (±10)	3-6 (±10)	0-6.3 (±10)	0.2 (±10)	0.1-0.3 (±10)	5-2 (±10)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 465 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Ti	Mo	Fe
соотношения элементов в %	0.02 (±0.005)	0.25 (±0.03)	0.015 (±0.005)	0.010 (±0.005)	0.25 (±0.05)	11.00-12.50 (±0.15)	10.75-11.25 (±0.10)	1.50-1.80 (±0.05)	0.75-1.25 (±0.03)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 440A (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Mo	Fe
соотношения элементов в %	0.60-0.75 (±0.03)	1.00 (±0.03)	0.040 (±0.005)	0.030 (±0.005)	1.00 (±0.05)	16.00-18.00 (±0.20)	0.75 (±0.05)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 430 (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	Nb и Ta	Fe
соотношения элементов в %	0.030 (±0.005)	0.50 (±0.03)	0.015 (±0.005)	0.015 (±0.005)	0.50 (±0.05)	11.00-12.50 (±0.15)	7.50-9.50 (±0.10)	1.50-2.50 (±0.10)	0.90-1.40 (±0.05)	0.50 (±0.03)	0.10-0.50 (±0.10)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Химический анализ Нержавеющая сталь 316L (ASTM F899):

Количественный анализ соотношения элементов в %.

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	N	Cu	Fe
соотношения элементов в %	0.030 (±0.005)	2.00 (±0.04)	0.025 (±0.005)	0.010 (±0.005)	0.75 (±0.05)	17.00-19.00 (±0.20)	13.00-15.00 (±0.15)	2.25-3.00 (±0.10)	0.10 (0.01)	0.50 (0.03)	основа

* Максимальное ограничение применяется к одному значению, если не указано иное

Сведения о производителях / поставщиках материалов:

МАТЕРИАЛ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ПОСТАВЩИКИ
Нержавеющая сталь 17-4 PH	Banner, США; Boston Centerless, США; Carpenter Technology Corporation, США; Edge International, США; FORECREU S.A.S., Франция; Fort Wayne Metals, США; Perryman company, США; Zapp, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring, США; Titanium Industries,

	США; A&G Grinding, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Prikos and Becker, США; Orchid Arcadia, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Tecomet Sheffield, Великобритания; Century Spring, США; Bollinghaus steel, GmbH, Германия; Valbruna, США; Crucible, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай; SANXIN Metal Technology Co.Ltd, Китай; Vested Metals, США.
Нержавеющая сталь 13-8 Мо PH	Banner, США; Boston Centerless, США; Carpenter Technology Corporation, США; Edge International, США; FORECREU S.A.S., Франция; Fort Wayne Metals, США; Perryman company, США; Zapp, США; Alro, США; Yarde Metals, Inc, США; SANXIN Metal Technology Co.Ltd, Китай; Vested Metals, США; Alro, США
Нержавеющая сталь 302	Banner, США; Boston Centerless, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring , США; Titanium Industries, США; A&G Grinding, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; Bollinghaus steel, GmbH, Германия; Valbruna, США; Crucible, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай; SANXIN Metal Technology Co.Ltd, Китай; Vested Metals, США; VIKING MATERIALS, США; A&G Centerless, США
Присадочная проволока (нержавеющая сталь)	Banner, США; Boston Centerless, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; A&G Grinding, США
Нержавеющая сталь 316	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring , США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай; VIKING MATERIALS, США
Нержавеющая сталь 440 C	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring , США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Tecomet Sheffield, Великобритания; Century Spring, США; Bollinghaus steel, GmbH, Германия; Valbruna, США; Crucible, США
Покрытие отдельных деталей - алюминитрид титана (AlTiN)	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring , США; A&G Grinding, США
Нержавеющая сталь 303	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring , США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; TW Metals, США




	США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай; VIKING MATERIALS, США
Нержавеющая сталь 304	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай; VIKING MATERIALS, США
Высокопрочная эпоксидная смола Masterbond system EP42HT-2	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; M.J Vail, Lee Spring, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США
Полиэфимидная смола ULTEM, цвет: серый – HU1000-7H7D436	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; M.J Vail, Lee Spring, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США
Нержавеющая сталь 17-7 PH	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; A&G Grinding, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай
Нержавеющая сталь 440A	Earl M Jorgensen (EMJ), США; Carpenter Technology Corporation, США
Нержавеющая сталь 455	Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Alro, США; Fry Steel, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Rolled Alloys, Inc, США; Yarde Metals, Inc, США; M.J Vail, Lee Spring, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; Precision Alloy, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай; A&G Grinding, США; SANXIN Metal Technology Co.Ltd, Китай
Политетрафторэтилен (Тефлон)	Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; A&G Grinding, США; Precision Alloy, США; Banner, США; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Carpenter Technology Corporation, США; Great Lakes Specialty Metals, США
Ацеталь сополимер Ticona Celcon M25 acetal (полиоксиметилэтилен), цвет: серый - CC 34031	Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; A&G Grinding, США; Precision Alloy, США; Banner, США; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Carpenter Technology Corporation, США; Great Lakes Specialty Metals, США
Нержавеющая сталь 18-8	VIKING MATERIALS, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Precision Alloy, США; Carpenter Technology Corporation, США; M. Vincent Specialty Metals, США; TW Metals, США; Fry Steel, США; Alro, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай
Эпоксидная смола Nazdar, синяя	VIKING MATERIALS, США
Эпоксидная смола Nazdar, белая	VIKING MATERIALS, США
Нержавеющая сталь 301	VIKING MATERIALS, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Precision Alloy, США; Carpenter Technology Corporation, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Alro, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Century Spring, США; Fry Steel,

	США; Yarde Metals, Inc, США; Rolled Alloys, Inc, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США
Нержавеющая сталь 430	VIKING MATERIALS, США
Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: серый	VIKING MATERIALS, США
Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий	VIKING MATERIALS, США
Силиконовая резина для медицинского применения, цвет: синий	VIKING MATERIALS, США
Силиконовая резина, цвет: черный	VIKING MATERIALS, США
Полипропилен Propylux, цвет: белый	VIKING MATERIALS, США
Алюминиевый сплав 6061-T6, анодирование, цвет: голубой	VIKING MATERIALS, США
Магнетик NdFeB 42 SH (покрытие Ni-Cu-Ni)	Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Precision Alloy, США; Carpenter Technology Corporation, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Alro, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Fry Steel, США; Yarde Metals, Inc, США; Rolled Alloys, Inc, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США
Нержавеющая сталь 308L	Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Precision Alloy, США; Carpenter Technology Corporation, США; M. Vincent Specialty Metals, США; Alro, США; Great Lakes Specialty Metals, США; Fry Steel, США; Yarde Metals, Inc, США; Rolled Alloys, Inc, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США; TW Metals, США; McMaster, США; Aerospace Specification Metals Inc., Китай
Полифенилсульфон Radel Цвет: синий – BU1027	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel R Цвет: синий – BU391	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel R Цвет: серый – GY1037	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel R Цвет: синий – blue 647C	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: черный BK937	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL1337	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: желтый – YL130	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый – GN1007	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: оранжевый – OR1145	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: серый – GY1037	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel R Цвет: серый	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Полифенилсульфон Radel Цвет: зеленый –GN1140	Westlake, Китай; Rochling & Quadrant, США
Нитрид-титановое покрытие	Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Yarde Metals, Inc, США; Rolled Alloys, Inc, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США

Нержавеющая сталь 316L	Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Yarde Metals, Inc, США; Rolled Alloys, Inc, США; Titanium Industries, США; A&G Centerless, США
Нержавеющая сталь Nitroni с 60	Precision Alloy, США; Copper and Brass (Thyssen Krupp), Германия; Earl M Jorgensen (EMJ), США; Banner, США; Carpenter Technology Corporation, США; Great Lakes Specialty Metals, США

5. Данные о маркировке

На этикетку инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных и принадлежностей к ним из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями наносится следующая информация: номер по каталогу, код партии, информация об изготовителе, размер, ориентация (если применимо) и т.д. Маркировка соответствует стандарту ISO 15223-1. На этикетку, маркировку либо на изделие могут быть нанесены следующие обозначения:

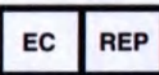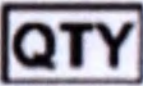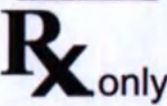
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Изготовитель
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Маркировка CE с кодом нотифицированного органа
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Количество
	Внимание! Согласно Федеральному законодательству США, это изделие может быть продано только врачу или поставляться по заказу врача
	Стандартный
	Гибкий



Обратитесь к инструкции по применению



Обратитесь к инструкции по применению, доступна на интернет-ресурсе

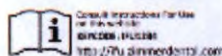

Сзади



Спереди



Только вставка

L

Левый

R

Правый

A/P

Передний/ задний

M/L


Медиальный/ латеральный

MED


Медиальный

LAT

Латеральный

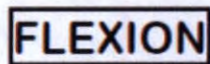

Сгибание

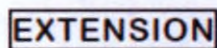

Растяжение



Не стерильно



Заблокировано



Разблокировано



Не предназначен для имплантирования



Удары не допускаются



Полосатый зеленый



Полосатый синий



Полосатый желтый



Полосатый фиолетовый



Зеленый




Синий



Желтый



Фиолетовый

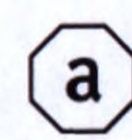

Для этих изделий допускается применение щелочных детергентов с обязательной последующей кислотной нейтрализацией и тщательной промывкой водой. Эти изделия можно очищать с применением средств для удаления ржавчины, утвержденных для удаления ржавчины и коррозии с хирургических инструментов.



Для этих изделий допускается применение щелочных детергентов с обязательной последующей кислотной нейтрализацией и тщательной промывкой водой. Эти изделия можно очищать с применением средств для удаления ржавчины, утвержденных для удаления ржавчины и коррозии с хирургических инструментов. Катетеры и полости должны очищаться вручную.



Для этих изделий допускается применение щелочных детергентов с обязательной последующей кислотной нейтрализацией и тщательной промывкой водой.

Для этих изделий допускается применение щелочных детергентов с обязательной последующей кислотной нейтрализацией и тщательной промывкой водой. Катетеры и полости должны очищаться вручную.

Эти изделия следует очищать вручную или комбинированным ручным/автоматическим способом, описанным в настоящем руководстве. Не допускается применение для этих изделий щелочных детергентов.

Передний

Задний

Цементируемый

Узкий

С ножкой

Проксимальный

Дистальный

Ниже приведены примеры этикеток.

LOT 99999999	EDI: 42502705401	REF 42-5027-054-01
Lot Number		Reference Number
PERSONA® The Personalized Knee System CR Femoral Provisional Left Size 3 Nonsterile Qty-1 U.S. Patent 8,551,179		
CR-FEMUR-PROBEKOMPONENTE LINKS GRÖSSE 3		
ÉLÉMENT D'ESSAI FÉMORAL CR GAUCHE TAILLE 3		
FEMORAL PROVISIONAL CR IZQUIERDO TAMAÑO 3		
PROVVISORIO FEMORALE CR SINISTRO MISURA 3		
		
+H124425027054011/999999999A166		
EC REP Zimmer U.K. Ltd., SN3 4FP, UK Authorized Representative in the European Community		   zimmer WARSAW, IN 46580, U.S.A. Products Ver. 4 Prod. Pack Ver. 5 WAANNS132 Ver. 2



Макет маркировки упаковки набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями на русском языке

На маркировке на русском языке обязательно содержится следующая информация:

- наименование медицинского изделия согласно Регистрационному удостоверению, представленному в разделе 1 данного документа.
- № регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями»; будет указан на маркировке после государственной регистрации медицинского изделия и получения соответствующего регистрационного удостоверения.
- Дата государственной регистрации медицинского изделия «Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями»; будет указана на маркировке после государственной регистрации медицинского изделия и получения соответствующего регистрационного удостоверения.
- Информация об Уполномоченном представителе Производителя (наименование, адрес, телефон).

Макет маркировки индивидуальной упаковки инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных и принадлежностей к ним на русском языке

На маркировке на русском языке обязательно содержится следующая информация:

- наименование изделия согласно Регистрационному удостоверению и перечню, представленному в разделе 1 данного документа из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями.
- № регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями»; будет указан на маркировке после государственной регистрации медицинского изделия и получения соответствующего регистрационного удостоверения.
- Дата государственной регистрации медицинского изделия «Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями»; будет указана на маркировке после государственной регистрации медицинского изделия и получения соответствующего регистрационного удостоверения.

- Информация об Уполномоченном представителе Производителя (наименование, адрес, телефон).

Допускается нанесение дополнительной информации, необходимой для идентификации медицинского изделия и (или) необходимой для предоставления по требованиям применимых локальных нормативно-правовых актов в отношении маркирования изделий, а также нанесение сопроводительной информации по требованиям заказчика.

6. Описание упаковки

Заявление изготовителя:

Нестерильная упаковка изделий компании «Зиммер» разработана и испытана в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами. К конструкции упаковки предъявляются требования выдерживать нагрузки, возникающие в нормальных условиях транспортировки и хранения. Упаковка изделий компании «Зиммер» обеспечивает удобный доступ к изделиям, безопасную транспортировку и минимальный расход упаковочных материалов.

Каждый инструмент хирургический, приспособление, компонент примерочный и принадлежности из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями поставляются в индивидуальной упаковке. Тип применяемой упаковки изделий указан в таблице раздела 4. На каждую индивидуальную упаковку наклеены этикетки на русском и английском языках (макет маркировки на русском языке приведен в разделе 6). Изделия в индивидуальной упаковке помещаются в групповую (транспортную) упаковку. На транспортную упаковку наносится маркировка, макет которой приведен в разделе 6 для «Набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями»

Комплект поставки

В комплект поставки входят сверло тиббиальное для ножки цементируемой PERSONA, диаметр 15.7 мм – 1 шт., рукоятка для пластины примерочной тиббиальной PERSONA – 1 шт. и любые инструменты, приспособления и примерочные компоненты при необходимости, принадлежности – не более 15 шт., а также инструкция по применению (на бумажном носителе (поставляется в транспортной таре, либо в упаковке изделия, либо прикреплена к упаковке изделия) или через глобальную информационную сеть (с указанием электронного адреса ресурса, на котором доступна электронная версия инструкции)).

По согласованию с заказчиком инструменты, приспособления, примерочные компоненты могут поставляться поштучно, т.к. изделие технически не обслуживается/ремонт не подлежит.

Описание конструкции и размеры упаковки нестерильных изделий, характеристики упаковочных материалов:

- Тип 1 - Фиксируется в трубе из жесткого полиэтилена (полиэтилентерефталат(гликоль), толщина $0,024 \pm 0,003$ дюймов ($0,6 \pm 0,08$ мм), прочность при растяжении (MD) на разрыв не менее 6500 фунтов/дюйм² (44,8 МПа)) с синими виниловыми защитными колпачками; тубус может быть помещен в полиэтиленовый пакет (толщина 5 мил (0,13 мм)). Возможные размеры (Д x Ш x В): 45 ± 3 см x 4 ± 1 см x 4 ± 1 см; 20 ± 2 см x 4 ± 1 см x 4 ± 1 см; 40 ± 3 см x 4 ± 1 см x 4 ± 1 см.
- Тип 2 - Изделие запечатано в полиэтиленовый пакет (толщина не менее 0,002 дюйма (0,05 мм), прочность при растяжении (MD) на разрыв не менее 6500 фунтов/дюйм² (44,8 МПа)). Размер пакета (В x Ш) 24 ± 2 см x 15 ± 2 см

- Тип 3 – Изделие фиксируется на картоне или гофрированном фиброкартоне (толщина $0,026 \pm 0,003$ дюймов ($0,66 \pm 0,08$ мм), сопротивление торцевому сжатию (EN ISO 3037-2013) ECT не менее 55 фунта/дюйм (lb/inch) (Н/м)) при помощи вакуумной термоусадочной пленки (марки Dupont Surlyn, толщина 10 мил ($0,254$ мм) $\pm 10\%$, прочность при растяжении (MD) не менее 5300 фунтов/дюйм² ($36,5$ МПа), удлинение (MD) 350%). В качестве оберточного материала может применяться упаковочная белая бумага, при необходимости используются синие защитные виниловые колпачки. Возможные размеры картонной подложки (В x Ш) 30 ± 2 см x 23 ± 2 см; 44 ± 3 см x 30 ± 2 см; 20 ± 2 см x 15 ± 2 см толщина определяется конструкцией изделия, не менее 3 мм
- Тип 4 – Изделие размещается в коробке (складываемой (толщина не менее 0,5 мм) либо состоящей из двух частей (толщина $0,024 \pm 0,002$ дюймов ($0,6 \pm 0,05$ мм)) из фиброкартона сплошного беленого сульфатного (SBS), сопротивление торцевому сжатию (EN ISO 3037-2013) ECT не менее 32 фунта/дюйм (lb/inch) (Н/м) с поролоновыми вставками и/или прокладочным материалом внутри. Возможные размеры коробки (Д x Ш x В): 13 ± 2 см x 13 ± 2 см x 8 ± 2 см, 40 ± 3 см x 13 ± 2 см x 5 ± 1 см
- Тип 5 – Изделие запечатано в пакет из пузырчатой пленки (толщина стенки не менее 2 мм, сопротивление разрыву не менее 70 Н/м), при необходимости используются синие защитные виниловые колпачки, пакеты типа «зип-лок», полиэтиленовые пакеты. Возможные размеры пакета (Д x Ш): 27 ± 2 см x 27 ± 2 см, 15 ± 2 см x 8 ± 2 см, 17 ± 2 см x 18 ± 2 см, 34 ± 2 см x 23 ± 2 см, 56 ± 3 см x 29 ± 2 см
- Тип 6 – Размещается в конверте с мягкими вставками (упаковочный короб) (толщина стенке не менее 2 мм, сопротивление разрыву не менее 70 Н/м). Материалы: НАРУЖНЫЙ — многослойная соэкструзионная пленка. ВНУТРЕННИЙ — пузырчатая пленка. Размер (Д x Ш x Т) 18 ± 2 см x 13 ± 1 см x $1 \pm 0,5$ см
- Тип 7 – конверт из беленого картона (толщина $0,02 \pm 0,002$ дюймов ($0,5 \pm 0,05$ мм), сопротивление торцевому сжатию (EN ISO 3037-2013) ECT не менее 32 фунта/дюйм (lb/inch) (Н/м)). Размер конверта (Д x Ш) 13 ± 2 см x 13 ± 2 см
- Тип 8- Изделие размещается в коробке из гофрированного картона (фиброкартон) белого цвета (толщина $0,024 \pm 0,002$ дюймов ($0,6 \pm 0,05$ мм), прочность на разрыв не менее 150 200 фунта/дюйм² (1379 кН/м²); сопротивление торцевому сжатию (EN ISO 3037-2013) не менее 32 фунта/дюйм (Н/м)), при необходимости используются синие защитные виниловые колпачки, пакеты из пузырчатой пленки, пакеты типа «зип-лок», полиэтиленовые пакеты, прокладочный материал (пузырчатая пленка, вспененный полиэтилен, упаковочная бумага, зеленый прокладочный материал с крупными порами). Возможные размеры (Д x Ш x В): 15 ± 2 см x 15 ± 2 см x 15 ± 2 см, 16 ± 2 см x 14 ± 2 см x 11 ± 2 см, 16 ± 2 см x 9 ± 2 см x 6 ± 2 см, 23 ± 2 см x 14 ± 2 см x 11 ± 2 см, 23 ± 2 см x 14 ± 2 см x 11 ± 2 см, 24 ± 2 см x 15 ± 2 см x 11 ± 2 см, 25 ± 2 см x 18 ± 2 см x 8 ± 2 см, 27 ± 2 см x 25 ± 2 см x 9 ± 2 см, 29 ± 2 см x 16 ± 2 см x 12 ± 2 см, 31 ± 2 см x 14 ± 2 см x 12 ± 2 см, 31 ± 2 см x 30 ± 2 см x 11 ± 2 см, 32 ± 2 см x 31 ± 2 см x 7 ± 2 см, 34 ± 2 см x 20 ± 2 см x 10 ± 2 см, 46 ± 3 см x 14 ± 2 см x 12 ± 2 см, 50 ± 3 см x 16 ± 2 см x 11 ± 2 см, 55 ± 3 см x 29 ± 2 см x 14 ± 2 см, 56 ± 3 см x 29 ± 2 см x $4 \pm 1,5$ см, 56 ± 3 см x 29 ± 2 см x 10 ± 2 см, 56 ± 3 см x 30 ± 2 см x 9 ± 2 см, 60 ± 3 см x 31 ± 2 см x 6 ± 2 см, 62 ± 3 см x 30 ± 2 см x 10 ± 2 см.

Для упаковки допускается применение защитных колпачков и упаковочной бумаги, вспененного полиэтилена, поролона для фиксации инструмента внутри упаковки. По необходимости (коробки) применяется термоусадочная пленка или полиэтиленовые пакеты.

Вышеперечисленные материалы идентичны применяемым в настоящее время в компании «Зиммер» для упаковки нестерильных изделий. Упаковки различных изделий отличаются только конструкцией внутреннего слоя.

Транспортная упаковка

В зависимости от количества инструментов, примерочных компонентов, приспособлений и принадлежностей транспортная упаковка набора может иметь различные размеры (размеры и изображения приведены в таблице ниже). На транспортную упаковку могут быть нанесены следующие символы:



Хрупкое. Осторожно:



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно:



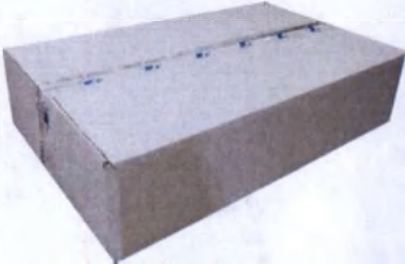
Верх

Таблица. Виды применяемой транспортной упаковки

п/п	Изображение	Размеры (Д x Ш x В), см	Упаковочный материал, прочностные характеристики
1		51±5 x 42±5 x 63±5	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм

п/п	Изображение	Размеры (Д x Ш x В), см	Упаковочный материал, прочностные характеристики
2		59±5 x 40±2 x 47±5	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
3		61±5 x 42±5 x 42±5	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
4		59±5 x 39±2 x 38±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
5		52±5 x 37±2 x 45±5	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм

п/п	Изображение	Размеры (Д x Ш x В), см	Упаковочный материал, прочностные характеристики
6		63±5 x 34±2 x 37±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
7		42±5 x 41±5 x 42±5	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
8		55±5 x 36±2 x 36±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
9		59±5 x 40±2 x 29±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм

п/п	Изображение	Размеры (Д x Ш x В), см	Упаковочный материал, прочностные характеристики
10		66±5 x 34±2 x 21±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
11		59±5 x 39±2 x 19±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
12		59±5 x 40±2 x 17±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
13		50±5 x 31±2 x 11±2	Картон, однослойный, толщина 2-4мм

п/п	Изображение	Размеры (Д x Ш x В), см	Упаковочный материал, прочностные характеристики
14		34±2 x 23±2 x 18±2	Картон, однослойный, толщина 2-4мм
15		24±2 x 24±2 x 22±2	Картон, однослойный, толщина 2-4мм
16		29±2 x 19±2 x 20±2	Картон, однослойный, толщина 2-4мм
17		52±5 x 13±2 x 13±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм

п/п	Изображение	Размеры (Д x Ш x В), см	Упаковочный материал, прочностные характеристики
18		62±5 x 11±2 x 11±2	Картон, двухслойный, толщина 6-7мм
19		20±2 x 16±2 x 12±2	Картон, однослойный, толщина 2-4мм

7. Очистка/дезинфекция

7.1 Подготовка к повторной обработке на месте использования

- Удалите с инструментов, приспособлений, компонентов примерочный и принадлежностей избыток органических жидкостей и тканей одноразовой салфеткой, не оставляющей ворсинок. Поместите изделия в резервуар с дистиллированной водой или на поднос с влажными полотенцами. Избегайте высыхания физиологического раствора, крови, органических тканей и жидкостей, фрагментов кости и других органических остатков на инструментах в период до обработки.
- Для получения оптимальных результатов инструменты, приспособления, компоненты примерочные и принадлежности следует очистить в течение 30 минут после использования или после удаления из раствора. Таким образом снижается риск высыхания перед очисткой.
- Использованные инструменты, приспособления, компоненты примерочные и принадлежности следует транспортировать в центральный стерилизационный блок в закрытых или накрытых контейнерах, чтобы снизить потенциальный риск контаминации.

7.2 Подготовка к очистке

- Строго следуйте особым инструкциям и символам на инструментах, приспособлениях, компонентах примерочных и принадлежностях.
- По возможности, изделия, состоящие из нескольких компонентов, следует разобрать, чтобы обеспечить оптимальную очистку. Старайтесь не потерять мелкие винты и другие компоненты.

7.3 Подготовка чистящих средств

- Компания «Зиммер» рекомендует использовать pH-нейтральные, ферментные и щелочные агенты и ПАВ с низким пенообразованием.
- Щелочные агенты с $\text{pH} \leq 12$ допускаются к использованию в тех странах, где этого требуют

- законодательные нормы предписания местных органов власти. После щелочного агента следует использовать нейтрализатор и/или тщательно прополоскать инструменты.
- Допускается использовать только агенты с доказанной эффективностью. Поскольку на мировом рынке представлено множество чистящих агентов и дезинфектантов, «Зиммер» не рекомендует никаких брендов.
 - При подготовке любого чистящего агента необходимо следовать инструкциям производителя относительно концентрации и температуры, а также время выдержки, обозначенное в методических указаниях по применению данного средства с учетом особенностей обрабатываемых изделий. Для подготовки чистящих агентов можно использовать смягченную проточную воду. Важно соблюдать рекомендуемый температурный режим, чтобы действие чистящих агентов было максимально эффективным.
 - Сухие порошковые чистящие агенты должны полностью раствориться перед использованием во избежание коррозии инструментов, а также обеспечения нужной концентрации.
 - Если приготовленный чистящий раствор станет макроскопически загрязненным (кровянистым и/или мутным), то следует приготовить новый.
- Примечание: При ручной очистке может потребоваться валидация результатов сотрудниками медицинского учреждения. Соответствующую документацию следует хранить в доступном для сотрудников месте во избежание ошибок, обусловленных человеческим фактором.
- Комбинированный метод очистки является предпочтительным и подходит для всех изделий.

7.4 Инструкции по очистке и дезинфекции

Инструкции по комбинированной ручной и автоматической очистке в Разделах А и В, указанные в Таблице 1, необходимы для очистки инструментов и поддонов, контейнеров и крышек. Во время очистки инструменты должны быть извлечены из поддонов или контейнеров.

Таблица 1 - Варианты очистки/дезинфекции

Метод	Описание	Раздел
Комбинирование ручной и автоматической очистки с использованием ферментных и нейтральных моющих средств	Замачивание в ферментном растворе и очистка щеткой, затем ультразвуковой очистки при погружении в ферментный раствор, затем цикл в автоматической моюще-дезинфицирующей машине с применением ферментных и нейтральных моющих средств.	А
Комбинирование ручной и автоматической очистки с использованием щелочного моющего средства и нейтрализатора	Замачивание в щелочном растворе с ультразвуковой обработкой, затем цикл в автоматической моюще-дезинфицирующей машине с применением щелочного моющего средства и нейтрализатора.	В

Раздел А

1. Промойте загрязненные инструменты, поддоны, контейнеры и крышки под проточной холодной водопроводной водой в течение не менее одной минуты. Удалите сильные загрязнения и остатки тканей мягкой нейлоновой щеткой.
2. Полностью погрузите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки в ферментный раствор и оставьте на время, обозначенное в методических указаниях по применению данного средства с учетом особенностей обрабатываемых изделий (не менее 10 минут). Во время очистки инструменты должны быть извлечены из поддонов или контейнеров. Аккуратно очистите изделие мягкой нейлоновой щеткой до полного удаления видимых загрязнений в течение не менее одной минуты и до полного удаления видимых

загрязнений. Особое внимание следует уделить щелям, просветам, сопряженным поверхностям, разъемам и другим труднодоступным для очистки областям. Для очистки просветов используйте длинную узкую мягкую щетку (например, ершик).

Примечание: Для оптимальной очистки труднодоступных участков и мелкошероховатых поверхностей используйте шприц или направленную струю воды.

3. Удалите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки из моющего раствора и прополощите их в очищенной воде в течение не менее 1 минуты. Тщательно промывайте просветы, несквозные отверстия и другие труднодоступные для очистки участки.
4. Полностью погрузите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки в ферментный раствор и оставьте для ультразвуковой очистки в течение 10 минут при 40 ± 5 кГц. Во время очистки инструменты должны быть извлечены из поддонов или контейнеров.
5. Удалите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки из моющего раствора и прополощите их в очищенной воде в течение не менее 1 минуты. Тщательно промывайте просветы, несквозные отверстия и другие труднодоступные для очистки участки.
6. Поместите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки в подходящую корзину моюще-дезинфицирующей машины и проведите стандартную процедуру очистки/дезинфекции инструментов. Во время очистки инструменты должны быть извлечены из поддонов или контейнеров. Важно соблюдать минимальные параметры для эффективной очистки и дезинфекции.

Раздел В

1. Промойте загрязненные инструменты, поддоны, контейнеры и крышки под проточной холодной водопроводной водой в течение не менее одной минуты. Удалите сильные загрязнения и остатки тканей мягкой нейлоновой щеткой.
2. Полностью погрузите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки в щелочной (pH 9-12) раствор и оставьте для ультразвуковой очистки на 10 минут при частоте 40 ± 5 кГц. Во время очистки инструменты должны быть извлечены из поддонов или контейнеров.
3. Удалите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки из моющего раствора и прополощите их в очищенной воде в течение не менее 1 минуты. Тщательно промывайте просветы, несквозные отверстия и другие труднодоступные для очистки участки.
4. Поместите инструменты, поддоны, контейнеры и крышки в подходящую корзину моюще-дезинфицирующей машины и проведите стандартную процедуру очистки/дезинфекции инструментов. Во время очистки инструменты должны быть извлечены из поддонов или контейнеров. Важно соблюдать минимальные параметры для эффективной очистки и дезинфекции.

Ниже указаны режимы и методы дезинфекции.

Метод дезинфекции	Режимы дезинфекции
Кипячение	Кипячение в дистиллированной воде при температуре $(99 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение $(30 + 5)$ минут
Паровой	Водяной насыщенный пар под избыточным давлением $P = 0,05$ Мпа ($0,5 \text{ кгс/см}^2$) при $(110 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение $(20 + 5)$ минут
Воздушный	Сушка горячим воздухом при $(120 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение $(45 + 5)$ минут

Далее см. разделы «ОСМОТР И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ» и «ОБСЛУЖИВАНИЕ»

7.5 ОСМОТР И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Внимательно осмотрите каждое изделие, чтобы убедиться, что все видимые остатки крови и загрязнения удалены. Если присутствует видимое загрязнение, повторите процедуру

очистки/дезинфекции.

- Внимательно осмотрите изделия, проверьте их целостность, наличие повреждений и/или признаков чрезмерного износа.
- Проверьте работу движущихся частей (например, таких как петли и замки) для обеспечения их работы в необходимом диапазоне движения.
- Проверьте длинные тонкие инструменты (в частности, вращающиеся инструменты) на предмет искривления.
- В случаях, когда инструменты являются частью более сложного узла, проверьте, чтобы все инструменты были четко сопоставимы с соответствующими компонентами.
- Если отмечается повреждение или износ, которые могут повлиять на функционирование инструмента, не используйте данное изделие и обратитесь к представителю компании «Зиммер» за заменой.

7.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ

После очистки смажьте движущиеся части водорастворимой смазкой, выполните сборку и затяните винты, где это необходимо.

8. Стерилизация

8.1 СТЕРИЛЬНАЯ УПАКОВКА

Для надлежащего процесса стерилизации необходимо произвести соответствующее упаковывание изделия. Допускается:

- индивидуальная упаковка инструментов;
- упаковка инструментов в жесткие упаковочные контейнеры с крышками;
- упаковка в поддоны и контейнеры с подложками для инструментов определенного вида (в ячейки, предназначенные для определенных инструментов, следует укладывать именно эти инструменты);
- упаковка в поддоны и контейнеры с изменяемой конфигурацией (в ячейки/секции, предназначенные для определенных инструментов, следует укладывать именно эти инструменты; секции не следует устанавливать на дне поддона внахлест, чтобы избежать повреждения уложенных в них инструментов, а также обеспечить правильное положение инструментов в ячейках/секциях. Ячейки/секции следует прочно закрепить на дне поддона, чтобы избежать нежелательных перемещений ячеек, повреждения и/или потери содержимого поддона. Пружины, установленные на оси креплений ячеек/секций, придают им большую устойчивость, минимизируют свободу движения относительно друг друга и дна поддона. Для обеспечения правильной работы ячеек/секций их следует периодически осматривать. Маркировочные метки и связанные с ними этикетки на поддонах/контейнерах должны соответствовать содержимому поддона/контейнера, чтобы необходимые инструменты были доступны для использования в операционной. Все вспомогательные инструменты, предоставляемые компанией «Зиммер» для извлечения индивидуальных ячеек из поддона, следует извлекать из поддона на время обработки, так как в операционной они не используются).
- упаковка в универсальные поддоны и контейнеры для инструментов без ячеек для определенных инструментов и универсальных ячеек (в этом случае все изделия, подлежащие разборке, перед упаковкой в контейнер следует разобрать. Изделия укладываются таким образом, чтобы обеспечить доступ пара ко всем их поверхностям. Не следует складывать инструменты вместе или допускать их соприкосновения).

Только произведенные и/или распространяемые «Зиммер» изделия можно укладывать в поддоны и контейнеры для инструментов компании «Зиммер». Инструкции компании «Зиммер» по повторной обработке не применимы к поддонам и контейнерам «Зиммер» для изделий, не произведенных и/или распространяемых «Зиммер».

8.2 ИНСТРУКЦИИ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ.

- Приведенные инструкции по стерилизации соответствуют требованиям международных стандартов. Эти инструкции следует применять для изделий, поставляемых нестерильными, при повторной обработке изделий многократного применения, а также для стерильных

изделий, которые были распакованы, но не использовались.

- В случае случайного нарушения стерильности при подготовке к операции стерильные одноразовые металлические инструменты можно стерилизовать только один раз непосредственно перед использованием, следуя рекомендуемым требованиям к стерилизации инструментов многократного применения. Исключения приведены ниже.

- Подробные рекомендации по стерилизации инструментов многократного применения см. на сайте www.zimmer.com.

- Не используйте повторно инструменты или изделия, на упаковке которых имеется знак однократного использования. Повторное использование одноразового изделия, контактировавшего с кровью, костью, тканью или другой биологической жидкостью, может нанести вред пациенту или пользователю. Возможные риски, связанные с повторным использованием одноразового изделия, включают, но не ограничиваются, механическую неисправность и передачу возбудителей инфекции.

- Перед выполнением стерилизации по возможности разбирайте изделия многократного применения на составные части.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОВТОРНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ:**

- одноразовые компоненты, загрязненные физиологическими жидкостями или остатками тканей или ранее имплантированные;

- одноразовые ретракторы со световодами;

- компоненты, у которых истек срок годности, указанный на упаковке;

- одноразовые инструменты, содержащие какие-либо неметаллические материалы.

- Не используйте для повторной стерилизации пластиковые подложки с углублениями и крышки из упаковки. Однокомпонентные изделия должны быть индивидуально упакованы в стерилизационный пакет медицинского назначения или салфетку, соответствующую рекомендуемым характеристикам для паровой стерилизации, приведенным в таблице ниже. Убедитесь в том, что пакет или салфетка достаточно большие для размещения изделий без натяжения швов и разрыва пакета/салфетки.

- Не ставьте тяжелые предметы на пластиковые контейнеры для стерилизации. Возникшая в результате этого деформация может привести к трещине в пластике.

- Изделия из титана или титановых сплавов могут образовывать оксидные пленки из-за химикатов, использованных при обработке парогенератора или из осадков deterгента. Хотя эти оксиды биосовместимы, они могут затруднить прочтение маркировки и градуировки на изделии.

- При первой стерилизации полиацетальные инструменты (примечные компоненты) или инструменты из полиацетальных сополимеров могут иметь формальдегидный запах. Он исчезнет через несколько циклов стерилизации.

- На полисульфоновых инструментах (примечных компонентах) могут образовываться трещины вследствие воздействия химических веществ, используемых для обработки парогенератора, и смазки.

- Перед вскрытием упаковки стерильные упакованные инструменты необходимо тщательно осмотреть и убедиться, что целостность упаковки не нарушена.

- Медицинское учреждение несет ответственность за выполнение штатных процедур по разборке, проверке и упаковке всех инструментов после тщательной очистки с проникновением стерилизующего пара и соответствующей сушкой. Кроме того, медицинское учреждение должно предусмотреть меры защиты острых и других потенциально опасных участков инструментов.

- Инструменты следует должным образом подготовить и упаковать в поддоны и/или контейнеры, что обеспечит адекватное проникновение пара и его прямой контакт со всеми поверхностями.

- Не следует использовать этиленоксидный и газоплазменный методы стерилизации, за исключением случаев, когда аннотация к применимому продукту содержит явную рекомендацию использовать данные методы стерилизации.

- Используйте паровой стерилизатор, прошедший должное обслуживание, поверку и калибровку.

Рекомендуемые условия стерилизации/повторной стерилизации

Предпочтительным и рекомендуемым «Зиммер» методом стерилизации инструментов для многократного применения является влажный пар/ автоклавирование. При загрузке образцов и выборе параметров стерилизации следуйте инструкциям производителя стерилизатора. Время сушки зависит от объема загрузки и должно быть увеличено при увеличении объема загрузки. Условия стерилизации для инструментов многократного применения для Российской Федерации представлены в таблице 9.2.1.

Стерилизация паровым методом

Тип	Давление пара в стерилизационной камере, МПа* (кг/см ²)	Температура стерилизации, °C	Время стерилизационной выдержки, мин
Предварительное вакуумирование /импульсное вакуумирование	0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1)	134 ± 1	5+1

* избыточное давление

Минимальная длительность сушки – 30 минут

Рекомендуемое минимальное время охлаждения – 30 минут.

В странах, где требования к стерилизации являются более строгими или более консервативными, чем представленные в таблице, следует выполнять предписания государственных или местных органов власти.

Методы очистки, дезинфекции и стерилизации могут быть определены медицинским персоналом на основании методических документов и рекомендаций, отражающих вопросы дезинфекции, очистки и стерилизации медицинских изделий. Медицинский персонал несет ответственность за очистку, дезинфекцию и стерилизацию медицинских изделий. Необходимо точно соблюдать внутренние регламенты лечебных учреждений и рекомендации производителей чистящих средств и автоматических моющих стерилизаторов. Необходимо регулярно следить за оборудованием и процедурами для обеспечения постоянной эффективности повторной обработки.

8.3 ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Стерильные упакованные изделия должны храниться в специальном хорошо проветриваемом помещении с ограниченным доступом, в котором обеспечена хорошая вентиляция и защита от пыли, влаги, насекомых, вредителей и экстремальных температур и влажности.
- После стерилизации изделий следует полностью высушить, а затем отправить на хранение.
- Перед открытием упаковки со стерильными изделиями внимательно осмотрите ее на предмет целостности.

Примечание: Сохранение целостности стерильной упаковки обусловлено в первую очередь условиями хранения. Если стерильная упаковка порвана, перфорирована, отмечаются признаки вскрытия или воздействия влаги, то изделия следует очистить, заново упаковать и простерилизовать.

Примечание: При наличии любых признаков вскрытия крышки либо фильтров стерилизационного контейнера фильтры следует заменить, а изделия вновь простерилизовать.

9. Международные стандарты

№ документа	Наименование
ISO 13485	Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования
ISO 14971	Медицинские изделия. Применение системы управления рисками к медицинским изделиям

ISO 16061	Инструменты, применяемые совместно с неактивными хирургическими имплантатами. Общие требования
ISO 14155-1	Клинические исследования медицинских изделий. Часть 1: Общие требования
MEDDEV.2.7.1	Указания по медицинским изделиям. Клинические испытания: Руководство для изготовителей и нотифицированных органов
ISO 10993-1	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1: Оценка и испытания в рамках процесса управления рисками
ISO 17664	Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем по обработке пригодных для повторной стерилизации медицинских изделий
ISO 17665-1	Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ANSI/AAMI ST81	Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем по обработке пригодных для повторной стерилизации медицинских изделий
AAMI TIR 12	Проектирование, испытания и маркировка многоразовых медицинских изделий, пригодных к стерилизации в больничных условиях: Указания для изготовителей медицинских изделий
EN 1041	Информация, предоставляемая изготовителем медицинских изделий
EN 980	Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий (заменен на стандарт ISO 15223-1)
ASTM F899	Стандартные характеристики ковких нержавеющей сталей, применяемых для производства хирургических инструментов
ISO 7153-1	Хирургические инструменты. Металлические материалы. Часть 1: Нержавеющая сталь
ASTM A484	Стандартные характеристики и общие требования к полосам, отливкам и поковкам из нержавеющей сталей
ASTM A555	Стандартные характеристики и общие требования к проволоке и пруткам из нержавеющей сталей
ASTM A564	Стандартные характеристики горячекатаных и холоднотянутых полос и профилей из нержавеющей сталей с дисперсионным твердением
ASTM D1710/ ASTM D3368/ AMS 3562	Стандартная спецификация для прутка из пресованного политетрафторэтилена (PTFE), толстостенных трубок и заготовок-основ/ Стандартная спецификация для листа и пленки из FEP-фторуглерода
ASTM A480	Стандартная спецификация на общие требования к плитам, листам и полосам катаным из нержавеющей и жаропрочной стали
ASTM A580	Стандартная спецификация для проволоки из нержавеющей стали
ASTM A276	Стандартная спецификация для прутков и форм из нержавеющей стали
ASTM A167	Стандартная спецификация для плит, листов и реек из нержавеющей и жаропрочной хромоникелевой стали
ASTM A313	Стандартная спецификация для проволоочных пружин из нержавеющей стали
ASTM D256	Стандартные методы испытаний пластиков на ударную вязкость по Изоду на маятниковых копрах
ASTM D1238	Стандартный метод определения скоростей истечения расплава термопластиков с помощью экструзионного пластометра
ASTM F138	Стандартная спецификация для прутков и проволоки из кованных сталей 18Хром-14Никель-2.5 молибден для хирургических имплантатов
ASTM F139	Стандартная спецификация для листов и реек из кованных сталей 18Хром-14Никель-2.5 молибден для хирургических имплантатов
ASTM F1855	Стандартная спецификация для полиоксиметилена (ацеталь) для медицинского применения

10. Экологические требования, включая требования по безопасному уничтожению и утилизации изделий

По истечении срока службы изделия должны быть очищены от всевозможных биологических материалов и должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами утилизации каждого изделия в соответствии с требованиями лечебных учреждений (требования к эпидемиологически опасным отходам).

В случае возникновения вопросов, необходимо связаться с местными муниципальными органами, ответственными за утилизацию отходов.

11. Срок годности и срок службы

Конструкция, применяемые материалы и их механические свойства обеспечивают соответствие инструментов хирургических, приспособлений, компонентов примерочных и принадлежностей назначению. Срок службы зависит от типа изделия, интенсивности использования (числа циклов применения и стерилизации), а также особенностей применения конкретным пользователем. Окончание срока службы обычно определяется по износу и повреждениям в ходе использования. При выявлении повреждений или износа, которые могут препятствовать нормальному функционированию изделия, необходимо обратиться к представителю компании «Зиммер» и заказать инструмент хирургический, приспособление, компонент примерочный на замену. Как правило, клиентам предлагается вернуть инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные из набора инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями, вышедшие из строя по причинам, не связанным с нормальным износом в ходе эксплуатации. Вышедшие из строя и возвращенные компании «Зиммер» инструменты хирургические, приспособления, компоненты примерочные изучаются в процессе рассмотрения рекламаций клиентов и заменяются на исправные.

Срок хранения не ограничен при условии соблюдения рекомендаций по условиям хранения.

Средний срок службы не менее 5 лет и определяется износом изделия (см. раздел «Критерии отказа»)

12. Условия транспортировки и хранения

- Изделия должны храниться в специально отведенных для этого местах с исключением доступа посторонних. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, защиту от пыли, влаги, проникновения насекомых, экстремальных перепадов температуры и влажности.
- Защитные колпачки и другие защитные устройства не следует снимать до момента непосредственного использования изделий.

Транспортировка изделий может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Если не указано иное, то иных условий транспортировки и хранения не устанавливается.

Рекомендуемые значения температуры и влажности при длительном хранении (но не ограничиваясь):

Температура: 10 - 30°C.

Влажность: 40-80%.

Значения температуры и влажности при транспортировке, при которых испытывалось изделие:

Минимальная температура при испытаниях: -18°C при неконтролируемом значении относительной влажности.

Максимальная температура при испытаниях: 49°C при значениях относительной влажности 35±5%.

13. Гарантия производителя

Перед использованием изделия, выведенного на рынок компанией «Зиммер», хирург должен тщательно изучить рекомендации, предупреждения и инструкции, а также доступную информацию, касающуюся изделия (например, публикации, касающиеся изделия, и материалы по хирургической технике). Компания «Зиммер» не несет ответственности за

осложнения, возникшие в результате использования данного изделия в целях, не соответствующих указанным, а также в результате несоблюдения хирургической техники или принятия неверных решений, выбора продукта и в связи подобными ситуациями вне контроля компании «Зиммер».

Производитель гарантирует качество изделий при условии их применения в соответствии с вышеприведенными рекомендациями.

Компания «Зиммер» предоставляет гарантийные обязательства с учетом требований местного законодательства. При подаче рекламации клиенту следует обратиться к местному представителю компании «Зиммер», который инициирует внутренний процесс работы с рекламациями и ответами на них.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Производитель гарантирует бесплатную замену неисправного изделия новыми в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты продажи изделия.
Гарантия не применяется в следующих случаях:

- Повреждения в результате транспортировки;
- Повреждения в результате хранения/эксплуатации при недопустимых показателях температуры и влажности;
- Повреждения в результате ненадлежащей эксплуатации, ошибок, халатности, нехватки знаний об изделии или навыков.

Гарантия не распространяется на изделие:

- не имеющее маркировки, перемаркированное и с частично разрушенной маркировкой (вызвавшей невозможность идентификации);
- с механическими, термическими повреждениями;
- со следами небрежной эксплуатации;
- со следами воздействия агрессивных сред (воды, огня, химреактивов, пищи, продуктов жизнедеятельности организмов);
- с различными не удаляемыми надписями заводского характера, а также с удаленной либо частично нарушенной маркировкой.

Условия, приведенные выше, считаются действительными, если иное не указано в договоре.

Контактные данные для обращения по вопросам, связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием, качеством и соответствием изделий нормативным требованиям на территории Российской Федерации:

ООО «Зиммер СНГ», 119048 Москва, ул. Усачева, дом 29, корпус 9, помещение 15

тел. +7(495) 980 08 85

[На бланке компании «Зиммер»]

«Зиммер, Инк.»
(Zimmer, Inc.)
Варшава, штат Индиана 46580
www.zimmer.com

Удостоверение информации в Досье

Настоящий документ подан в рамках заявки в Российской Федерации в отношении медицинского изделия «Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями» и содержит следующее:

- Инструкции по применению

Я удостоверяю, что, насколько мне известно, поданные документы являются верными и точными. Кроме того, компания «Зиммер, Инк.» (Zimmer, Inc.) принимает на себя ответственность по всем юридическим обязательствам, связанным с подачей документов.

/подпись/

Хуан Д. Буйтраго
Директор по нормативно-правовому регулированию
«Корпорейт Америка» (Corporate America)
«Зиммер, Инк.» (Zimmer, Inc.)

Подписано под присягой в моем присутствии сегодня, 12 июля 2019 г., в округе Косцюшко, штат Индиана.

/подпись/

Нотариус штата Индиана
Проживающий в округе Элкхарт

[Штамп:


Карин С. Хансен-Вайли
Нотариус, штат Индиана
Округ Элкхарт
Лицензия № 683551

Моя лицензия действительна до 12 апреля 2024 г.]

[Печать нотариуса]

[Далее следует текст документа «Инструкция по применению медицинского изделия: Набор инструментов хирургических, приспособлений и компонентов примерочных для установки эндопротезов коленного сустава с принадлежностями», представленного на русском языке]

Перевел Сигов Кирилл Олегович

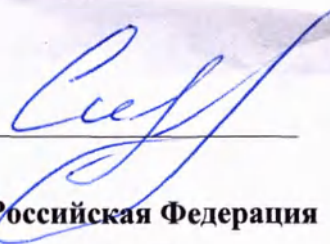
Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого августа две тысячи девятнадцатого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сигова Кирилла Олеговича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2019-3-10460


Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



 В.А. Король

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  лист(-а,-ов)

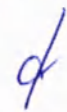 В.А. Король

