

Инструкция

Фиксаторы нижней конечности

Ортез на коленный сустав эластичный ОК-11(серийный номер 001)

Ортез на коленный сустав эластичный с липучкой ОК-12 (серийный номер 002)

Ортез на коленный сустав высокой эластичности ОК-13 (серийный номер 003)

Показания:

- профилактика повреждений коленного сустава при занятиях спортом;
- ушибы, травмы коленного сустава;
- растяжения мышц и связок;
- болевого синдрома при хронических заболеваниях суставов;
- профилактика переохлаждения суставов при работе в сложных климатических условиях.

Результат применения:

- согревает сустав и прилежащие ткани;
- обладает микромассажным эффектом и компрессией;
- обеспечивает фиксацию суставов;
- уменьшает болевой синдром;
- разгружает мышцы и связки коленного сустава.

Особенности: изготовлены из эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Полотно выполнено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. Изделия ОК-12 имеет одну лямку-липучку, которое обеспечивает более плотную фиксацию. Полотно изделия ОК-13 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облежание и правильное распределение давления. Изделия воздухопроницаемые, влагоотводящие, способствующие интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, сохраняют тепло и улучшают кровообращение в суставе.

Масса изделий составляет 40-55 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** XS,S,M,L,XL,XXL (измерение окружности середины коленного сустава в положении стоя, см).

Состав изделий ОК-11, ОК-12, ОК-13: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на коленный сустав эластичный, усиленный ребрами жесткости ОКЕ-11 (серийный номер 004)

Ортез на коленный сустав эластичный, усиленный ребрами жесткости с липучкой ОКЕ-12(серийный номер 005)

Ортез на коленный сустав высокой эластичности, усиленный ребрами жесткости ОКЕ-13(серийный номер 006)

Показания:

- профилактика повреждений коленного сустава при занятиях спортом;
- ушибы, травмы коленного сустава;
- растяжения мышц и связок;
- болевого синдрома при хронических заболеваниях суставов;

-профилактика переохлаждения суставов при работе в сложных климатических условиях.

Результат применения:

- согревает сустав и прилежащие ткани;
- обладает микромассажным эффектом и компрессией;
- обеспечивает фиксацию суставов;
- уменьшает болевой синдром;
- разгружает мышцы и связки коленного сустава;
- спиральные ребра жесткости снижают ударные нагрузки на коленный сустав.

Особенности: Изготовлен из эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Полотно обладает воздухопроницаемым влагоотводящим эффектом, изготовлено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. Изделие ОКЕ-12 имеет одну лямку- липучку, которая обеспечивает более плотную фиксацию. Полотно изделия ОКЕ-13 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облевание и правильное распределение давления. Имеются боковые ребра жесткости.

Масса изделий составляет 70-90 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** XS,S,M,L,XL,XXL (измерение окружности середины коленного сустава в положении стоя, см).

Состав изделий: ОКЕ-11, ОКЕ-12,ОКЕ-13: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на коленный сустав эластичный с ребрами жесткости и силиконовой подушечкой OKS-11 (серийный номер007)

Ортез на коленный сустав высокой эластичности с силиконовой подушечкой OKS-12(серийный номер008)

Ортез на коленный сустав высокой эластичности с ребрами жесткости и силиконовой подушечкой OKS-13 (серийный номер009)

Ортез на коленный сустав туго-эластичный с ребрами жесткости и силиконовой подушечкой OKS-14 (серийный номер010)

Показания:

- ушибы и растяжения связок коленного сустава;
- вывих надколенника;
- воспалительные заболевания коленного сустава и надколенника;
- реабилитация после травм коленного сустава и надколенника;
- профилактика травм коленного сустава при физической нагрузке.

Результат применения:

- согревает сустав и прилежащие ткани;
- обладает микромассажным эффектом и компрессией;
- обеспечивает фиксацию суставов;
- уменьшает болевой синдром;
- разгружает мышцы и связки коленного сустава;
- спиральные ребра жесткости снижают ударные нагрузки на коленный сустав;
- силиконовая подушечка фиксирует коленную чашечку.

Особенности: Изготовлены из эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое

воздействие на сустав. Полотно обладает воздухопроницаемым влагоотводящим эффектом, изготовлено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. Полотно изделия OKS-12, OKS-13 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облежание и правильное распределение давления. OKS-14 оказывает тугую фиксацию и компрессионное воздействие на коленный сустав, повышая его устойчивость к нагрузкам. Изделия OKS-11, OKS-13, OKS-14 снабжены боковыми ребрами жесткости. Силиконовая подушечка фиксирует надколенник.

Масса изделий составляет 85-105 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, серый, черный, белый, синий. **Размеры:** XS,S,M,L,XL,XXL (измерение окружности середины коленного сустава в положении стоя, см).

Состав изделий: 67%- нейлон, 23% - эластик, 10% - лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на колено неопреновый с силиконовой вставкой OKN-21 (серийный номер 011)

Ортез на колено неопреновый с силиконовой вставкой и ребрами жесткости OKN-22 (серийный номер 012)

Показания:

- воспалительные и дегенеративные заболевания;
- профилактика травм коленного сустава и надколенника;
- ушибы, растяжения связок;
- боли в коленном суставе;
- период реабилитации после травм коленного сустава;
- артрозо-артриты, бурситы, синовиты.

Результат применения:

- фиксация коленного сустава и надколенника, стабилизация коленного сустава во фронтальной плоскости, умеренная компрессия;
- микромассажное действие;
- теплосберегающий эффект способствует улучшению кровообращения;
- упругий валик-кольцо стабилизирует надколенник;
- спиральные ребра жесткости в модели OKN-21 снижают ударные нагрузки при ходьбе.

Особенности: Изготовлен из пористого аэропрена, обладающего теплосберегающим свойством, не препятствуя дыханию кожи. Отверстие на передней поверхности бандажа и упругий валик-кольцо надежно ограничивают подвижность коленной чашечки. Спиральные ребра жесткости в изделии OKN-22 дают возможность использовать его при повреждениях крестообразной связки коленного сустава.

Масса изделий составляет 130-150 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, белый, синий, серый. **Размер:** XS,S,M,L,XL,XXL (измерение окружности середины коленного сустава в положении стоя, см).

Состав изделий: 30% - неопрен, 27% - хлопок, 23% - эластик, 20% - лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез для надколенника фиксирующий ОР-21(серийный номер013)

Ортез для надколенника универсальный ОР-22(серийный номер014)

Показания:

- остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгута-Шляттера);
- привычный (повторяющийся) вывих коленной чашечки (надколенника);
- профилактика вывиха надколенника при повышенных нагрузках на коленный сустав;
- профессиональные и спортивные опорные нагрузки на коленный сустав.

Результат применения:

- усиливает поддержку коленного сустава за счет фиксации сухожилий четырехглавой мышцы бедра;
- ОР-21, дополнительная вкладка обеспечивает более сильную фиксацию надколенника;
- ОР-22, скользящая основа поддерживает правильную компрессию в положении движения сустава.

Масса изделий составляет 35-40 гр. в зависимости от размера.

Особенности: изделие можно одевать непосредственно на тело. Состоит из эластичной манжеты, силиконовой подушки на область бугристости большеберцовой кости и одной затяжки с застежкой-липучкой.

Цвет: черный, синий, бежевый, белый, серый. **Размер:** универсальный.

Состав изделий: 60% - полиэстер, 20%-нейлон, 12%- сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, одна лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на коленный сустав с боковыми пластинами ОК-21(серийный номер015)

Ортез на коленный сустав с боковыми пружинами ОК-22(серийный номер016)

Показания:

- болевого синдром при травмах и заболеваниях суставов;
- нестабильность коленного сустава;
- травмы коленной чашечки;
- повреждения менисков;
- профилактика заболеваний и травм коленного сустава.

Результат применения:

- боковые пластины (съемные полицентрические шарниры) обеспечивают нормальное движение коленного сустава;
- ортез иммобилизует (создает покой) коленный сустав в период воспалительного заболевания, при острой травме или после оперативного лечения;
- коленный сустав фиксирован и разгружен;
- обеспечены компрессионный и массажный эффекты;

-теплосберегающий эффект обеспечивает усиление кровообращения мышц и улучшение впитывания лекарственных средств;

-ортез способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Масса изделий составляет 330-450 гр. в зависимости от размера.

Особенности: Изготовлен из гипоаллергенного неопрена, обладающего также выраженным теплосберегающим эффектом, что улучшает кровоснабжение, способствует быстрому впитыванию наружных медикаментозных средств. Пелот в области коленной чашечки фиксирует сустав. ОК-21 имеет боковые пластины обеспечивают боковую стабилизацию коленного сустава. Спиральные ребра жесткости по бокам изделия ОК-22 обеспечивают дополнительную поддержку и мягкую фиксацию коленного сустава и сухожилий. Степень фиксации регулируются за счет натяжения двух лямок-липучек.

Цвет: черный, серый, белый, бежевый, синий. **Размер:** S,M,L,XL,XXL (измерение окружности середины коленного сустава в положении стоя, см).

Состав изделий: 60% - полиэстер, 20%-нейлон, 12%- сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на коленный сустав с боковыми пластинами разъемный ОКР-21
(серийный номер017)

Ортез на коленный сустав с боковыми пружинами разъемный ОКР-22
(серийный номер018)

Показания:

- консервативное лечение артрозов коленного сустава;
- нестабильность коленного сустава;
- стабилизация после снятия гипсовых повязок;
- реабилитация после операций;
- профилактика травм сустава при занятиях, связанных с нагрузкой на коленный сустав;

-ортез удобно надевать при значительной разнице окружностей ноги выше и ниже колена, при избыточном весе или болях в спине, а также при регулярных физиотерапевтических процедурах.

Результат применения:

- боковые пластины (съемные полицентрические шарниры) обеспечивают нормальное движение коленного сустава;
- ортез иммобилизует (создает покой) коленный сустав в период воспалительного заболевания, при острой травме или после оперативного лечения;
- коленный сустав фиксирован и разгружен;
- обеспечены компрессионный и массажный эффекты;
- теплосберегающий эффект обеспечивает усиление кровообращения мышц и улучшение впитывания лекарственных средств;
- ортез способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Особенности: изготовлен из гипоаллергенного неопрена, обладающего также выраженным теплосберегающим эффектом, что улучшает кровоснабжение, способствует быстрому впитыванию наружных медикаментозных средств. Пелот в

области коленной чашечки фиксирует сустав. ОКР-21 имеет боковые пластины обеспечивают боковую стабилизацию коленного сустава. Спиральные ребра жесткости по бокам изделия ОКР-22 обеспечивают дополнительную поддержку и мягкую фиксацию коленного сустава и сухожилий. Изделия оснащены двумя лямками-липучками.

Разъемная конструкция облегчает надевание ортеза на коленный сустав, с том числе при сильных отеках и поверх бинтовых повязок.

Масса изделий составляет 330-450 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, серый, белый, бежевый, синий. Размеры ОКР-21: XS,S,M,L,XL,XXL ; ОКР-22: S/M, L/XL (измерение окружности середины коленного сустава в положении стоя, см).

Состав изделий: 60% - полиэстер, 20%-нейлон, 12%- сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на коленный сустав с регулятором угла сгибания, укороченный OR-31 (серийный номер019)

Ортез на коленный сустав с регулятором угла сгибания, универсальный OR-32(серийный номер020)

Ортез на коленный сустав с регулятором угла сгибания, удлиненный OR-33(серийный номер021)

Показания:

- хроническая нестабильность коленного сустава;
- повреждения и разрывы боковых и крестообразных связок коленного сустава;
- травмы менисков;
- постепенное регулируемое расширение объема движений в коленном суставе при реабилитации после повреждений и восстановительных хирургических операций;
- реабилитационные мероприятия после эндопротезирования коленного сустава.

Результат применения:

- фиксация коленного сустава;
- стабилизация и возможность дозированных движений коленного сустава;
- с помощью угломера задаются параметры объема движений при разработке контрактур коленного сустава смешанного генеза.

Состоит из:

- четырёх манжет из синтетического материала с тканевым покрытием на голень и бедро;

- двух металлических шин с шарниром, регулирующим объем движений с шагом 10 градусов; иммобилизует коленный сустав по углом 10, 20, 30 градусов. Задаёт объем движения в диапазоне от 0 до 120 градусов.

- четырёх ремней с застежками-липучками

Выдвижная шина позволяет размещать ортез на нижней конечности: по внутренней поверхности бедра – под область паховой складки, снаружи – до области тазобедренного сустава; длина шины регулируется в диапазоне 52-72 см с шагом в 2,5 см.

OR-31– Рычаг захвата уменьшен,

OR-33 – увеличенный рычаг захвата.

Масса изделий составляет 1500-2000 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, серый, синий, белый, бежевый. **Размер:** универсальный.

Состав изделий: 60% - полиэстер, 20%-нейлон, 12%- сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез стабилизирующий на коленный сустав ОКР-31 (серийный номер022)

Ортез стабилизирующий на коленный сустав удлинённый ОКР-32(серийный номер023)

Показания:

- нестабильность коленного сустава выраженной степени;
- нефиксированные деформации коленного сустава (вальгусная или варусная);
- травмы надколенника;
- повреждения менисков;
- состояние после операции на коленном суставе и послеоперационные боли;
- реабилитация после травм и восстановительных операций на менисках;
- иммобилизация коленного сустава при транспортировке.

Результат применения:

-в основу действия ортеза положен принцип стабилизации, позволяющий исключать, существенно снижать или корректировать осевую нагрузку на сустав.

Состоит из:

-трех частей, выполненных из синтетического материала с мягким, приятным на ощупь тканевым покрытием;

-пяти металлических шин алюминиевого сплава;

-оснащен системой из четырех или шести затяжек (в зависимости от размера), снабженных застежками-липучками соответственно.

-за счет удлинённости полотна и пластин, обеспечивает больший обхват и более полную фиксацию сустава, что позволяет оставлять сустав в полной неподвижности.

Масса изделий составляет 800-1100 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, серый, бежевый, синий. **Размер:** S,M,L,XL,XXL (измерение окружности бедра, см).

Состав изделий: 60% - полиэстер, 20%-нейлон, 12%- сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.



OK-11



OK-12



OK-13

Ортез на коленный
сустав эластичный
XS,S,M,L,XL,XXL

Ортез на коленный
сустав эластичный, с
липучкой
XS,S,M,L,XL,XXL

Ортез на коленный
сустав высокой
эластичности
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность середины коленного сустава в положении стоя
XS	до 30
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XXL	более 50



OKE-11



OKE-12

Ортез на коленный
сустав эластичный,
усиленный ребрами
жесткости
XS,S,M,L,XL,XXL

Ортез на коленный
сустав эластичный,
усиленный ребрами
жесткости, с липучкой
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность середины коленного сустава в положении стоя
XS	До 30
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XXL	более 50



ОКЕ-13

Ортез на коленный
сустав высокой
эластичности, усиленный
ребрами жесткости
S,M,L,XL,XXL




OKS-11



OKS-12



OKS13

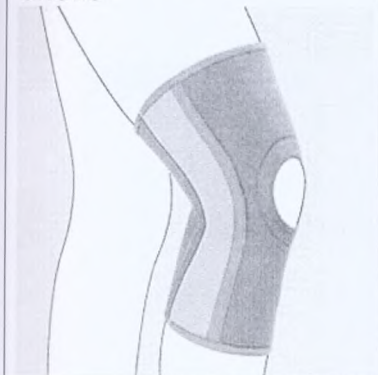

OKS-14

Ортез на коленный сустав эластичный, с ребрами жесткости и силиконовой подушечкой XS,S,M,L,XL,XXL

Ортез на коленный сустав высокой эластичности с силиконовой подушечкой S,M,L,XL,XXL

Ортез на коленный сустав высокой эластичности с ребрами жесткости и силиконовой подушечкой S,M,L,XL,XXL

Ортез на коленный сустав туго-эластичный с ребрами жесткости и силиконовой подушечкой S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность середины коленного сустава в положении стоя
XS	до 30
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XXL	более 50



OKN-21

Ортез на колено
неопреновый
силиконовой вставкой
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность середины коленного сустава в положении стоя
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XL	более 50



OKN-22

Ортез на колено
неопреновый с
силиконовой вставкой и
ребрами жесткости
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность середины коленного сустава в положении стоя
XS	до 30
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XXL	более 50



OP-21

Ортез для надколенника
фиксирующий

Код ОКП: 93 9670
(р-р Универсальный)



OP-22

Ортез для надколенника
универсальный



OK-21

Ортез на коленный
сустав с боковыми
пластинами
XS,S,M,L,XL,XXL



OK-22

Ортез на коленный
сустав с боковыми
пружинами
S,M,L,XL,XXL


Код ОКП: 93 9670

размер	Окружност ь середины коленного сустава в положени и стоя
XS	до 30
S	30-35
M	35-40
L	40 45
XL	4 -50
XXL	более 50



ОКР-21

Ортез на коленный сустав с боковыми пластинами разъемный XS,S,M,L,XL,XXL

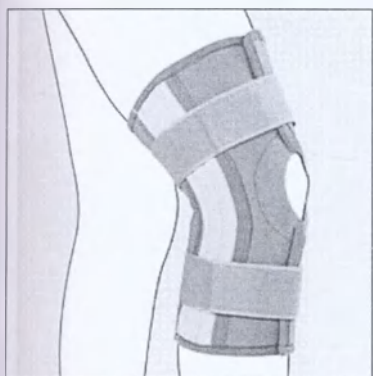


ОКР-22

Ортез на коленный сустав с боковыми пружинами разъемный S/M,L/XL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность середины коленного сустава в положении стоя
XS	до 30
S	30-35
M	35-40
L	40-45
XL	45-50
XXL	более 50

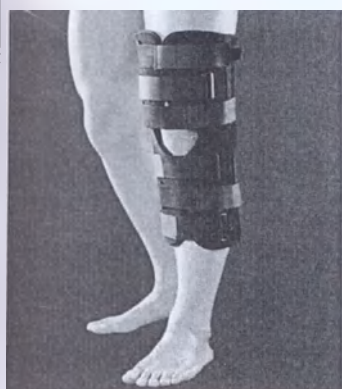

ОКР-31

Ортез стабилизирующий на коленный сустав S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	окружность бедра	длина изделия
S	до 43	42
M	43-50	50
L	50-56	58
XL	56-62	63
XXL	более 62	70



ОКР-32

Ортез стабилизирующий на коленный сустав удлиненный S,M,L,XL



OR-31

Ортез на коленный сустав с регулятором угла сгибания, укороченный

Код ОКП: 93 9670
Размер: универсальный



OR-32

Ортез на коленный сустав с регулятором угла сгибания, универсальный



OR-33

Ортез на коленный сустав с регулятором угла сгибания, удлиненный

Фиксатор большого пальца стопы OPD (серийный номер 24)

Описание:

- фиксатор состоит из пластиковой рамы с пенополиуретановыми накладками и 2 застежками-липучками, позволяющей оттянуть большой палец внутрь;
- ночной отводящий бандаж на большой палец, изготовлен из прочного пластика;
- пластиковый каркас удерживает стопу и большой палец в правильном положении во время ночного отдыха;
- мягкие внутренние накладки уменьшают боль и делают лечение комфортным;

- натяжение биндажа постепенно усиливают до полного излечения (исправления деформации пальца);

Масса изделий составляет 30-55 гр. в зависимости от размера.

Назначение:

- консервативное лечение вальгусная деформация большого пальца стопы;
- фиксация в правильном положении после оперативного лечения.

Преимущества:

- прочный пластиковый каркас удерживает большой палец в правильном положении во время сна.

Рекомендации

по

использованию:

Только для ночного использования. **При ходьбе не применять!** Не использовать при открытых и кровоточащих ранах.

Размер: универсальный.

Цвет: белый, бежевый, серый, черный.

Состав изделия: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и винилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез-фиксатор голеностопа в форме 8-образной повязки FA-11 (серийный номер 025)

Показания:

- частичные повреждения связок и суставной капсулы голеностопного сустава;
- профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом.

Результат применения:

- ограниченная фиксация ахиллова сухожилия, голеностопного сустава и стопы;
- легкая компрессия;

Изготовлен из медицинского эластика в форме 8-образной повязки. Компрессия достигается за счет эластичной ленты и возможности регулирования утягивания с помощью застежки-липучки над лодыжками.

Масса изделий составляет 25-35 гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, черный, бежевый, серый, синий. **Размеры:** S,M,L,XL (измерение окружности голени выше костей лодыжки, см).

Состав изделия: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав эластичный OA-11(серийный номер 026)

Ортез на голеностопный сустав эластичный, с липучкой OA-12(серийный номер 027)

Ортез на голеностопный сустав высокой эластичности OA-13 (серийный номер 028)

Показания:

- травмы, ушибы, растяжения связок голеностопного сустава;
- профилактика травм и обострений воспалительных заболеваний голеностопного сустава при физических нагрузках.

Результат применения:

- микромассажное действие;
- равномерная легкая компрессия;
- обеспечивает фиксацию сустава;
- снижение болевого синдрома.

Изготовлен из эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Полотно выполнено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. Изделия ОА-12 имеет 1 лямку липучку, которое обеспечивает более плотную фиксацию. Полотно изделия ОА-13 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облежание и правильное распределение давления. Воздухопроницаемое, влагоотводящее способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, сохраняет тепло и улучшает кровообращение в суставе.

Масса изделий составляет 30-55 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, синий, черный. **Размеры:** XS,S,M,L,XL,XXL (измерение окружности голени выше костей лодыжки, см)

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав эластичный усиленный OAR-11(серийный номер 029)

Ортез на голеностопный сустав туго-эластичный с ребрами жесткости OAR-12 (серийный номер 030)

Ортез на голеностопный сустав эластичный усиленный, с липучкой OAR-13 (серийный номер 031)

Показания:

- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава;
- профилактика травм голеностопного сустава и обострений воспалительных заболеваний;
- профилактика обострений хронического течения воспалительных заболеваний голеностопного сустава;
- профилактика травм при занятиях спортом и физических нагрузках.

Результат применения:

- умеренная фиксация голеностопного сустава;
- равномерная компрессия;
- ребра жесткости снижают ударные нагрузки на сустав.

Изготовлен из плотного эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Полотно обладает воздухопроницаемым влагоотводящим эффектом, изготовлено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. Изделия OAR-13 имеет 1 лямку- липучку, которая обеспечивает более плотную фиксацию. Полотно изделия OAR-12 имеет

разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облегание и правильное распределение давления. Имеются боковые ребра жесткости.

Спиральные пружинные ребра жесткости снижают ударные нагрузки на сустав.

Масса изделий составляет 40-60гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, черный, бежевый, серый, синий. **Размер:** S,M,L,XL,XXL (измерение окружности голени выше костей лодыжки, см).

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав эластичный с силиконовыми вставками OAS-11 (серийный номер032)

Ортез на голеностопный сустав эластичный с силиконовыми вставками и липучкой OAS-12 (серийный номер033)

Ортез на голеностопный сустав высокой эластичности с силиконовыми вставками OAS-13 (серийный номер034)

Показания:

- растяжения мышц и связок сустава;
- реабилитация после вывихов и подвывихов голеностопного сустава;
- профилактика обострений и консервативное лечение артрозов, артритов, бурситов, синовитов;
- профилактика травм при нагрузках на голеностопный сустав;
- уменьшение отеков после травм и операций.

Результат применения:

-фиксация голеностопного сустава, силиконовые вставки надежно защищают лодыжки, уменьшают отек и стимулируют проприоцептивную чувствительность (глубокую чувствительность).

Изготовлен из плотного эластичного материала. Силиконовые подушечки в области костных выступов фиксируют голеностопный сустав. Одна лямка-липучка на изделиях OAS-12 обеспечивает более плотную и надежную фиксацию.

Полотно изделия OAS-13 изготовлено из высоко-эластичного материала, которое имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облегание и правильное распределение давления.

Масса изделий составляет 65-90 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый. **Размеры:** S,M,L,XL,XXL (измерение окружности голени выше костей лодыжки, см).

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав со шнуровкой, жесткой фиксации ОА-21(серийный номер 035)

Ортез на голеностопный сустав со шнуровкой, мягкой фиксации ОА-22(серийный номер 036)

Показания:

- повреждения связок голеностопного сустава;
- травмы лодыжек;
- хроническая нестабильность голеностопного сустава выраженной степени;
- вялые параличи стопы;
- реабилитация после травм и операций на голеностопном суставе;
- при чрезмерной подвижности (постоянные вывихи) и при «отвисании» стопы;
- профилактика повреждений ахиллова сухожилия, голеностопного сустава и стопы при занятиях спортом, больших нагрузках.

Результат применения:

- фиксация голеностопного сустава и нижней трети голени;
- ОА-21 обеспечивают сильную, плотную фиксацию голеностопного сустава;
- ОА-22, за счет более мягкого и приятного материала обеспечивает мягкую, в то же время плотную фиксацию сустава.

Изготовлен из плотного дышащего материала. Боковые жесткие металлические шины надежно фиксируют сустав. Шнуровка облегчает индивидуальную регулировку размера ортеза. Подходит для ношения в повседневной обуви. По назначению врача ортез можно применять вместо гипсовой повязки. Универсальны, можно применять как на правую так и на левую ногу.

Цвет: черный, белый, серый, бежевый, синий. **Размеры:** S,M,L,XL (измерение окружности голени выше костей лодыжки, см).

Состав изделия ОА-21: 60% - полиэстер, 20%-нейлон, 12%- сталь, 5%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Состав изделия ОА-22: 13%-хлопок, 50%-полиэстер, 37%-эластик.

Масса ОА-21 составляет 200-250 гр. в зависимости от размера.

Масса ОА-22 составляет 250-300гр. В зависимости от размера.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав (пневмошина) ОАР-311(серийный номер 037)

Показания:

- реабилитация после вывихов, подвывихов голеностопного сустава;
- болевого синдром и отеки после операций и травм костей и мягких тканей голеностопного сустава.

Результат применения:

- жесткая фиксация голеностопного сустава и нижней трети голени;
- иммобилизирует и охлаждает голеностопный сустав в период воспалительного заболевания, при острой травме или после оперативного лечения.

Изготовлен из двух пластиковых шин анатомической формы и двух гелевых подушек для дополнительной фиксации и охлаждения мягких тканей голеностопного сустава. Пластиковые шины анатомической формы точно повторяют контур ноги и крепятся на голени и помощью двух широких регулируемых ремней с застежкой-липучкой. Один из двух ремней с застежкой-липучкой расположенный на подошве, позволяет регулировать ортез по индивидуальным размерам ноги пациента. Гель

подушек обладает способностью сохранять до двух часов низкую температуру (после охлаждения в морозильной камере в течение 15-20 минут).

Масса изделий составляет 350гр.

Цвет: белый, синий, черный, бежевый, серый. **Размеры:** универсальный.

Состав изделия: 45% - полипропилен, 30%- нейлон, 5%- сополимер этилена и венилацетата, 5%- вспененный полиуретан, 5%- хлопок, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав (стоподержатель) OAS-312(серийный номер 038)

Показания:

-синдром отвисающей стопы после перенесенных невритов и повреждений малоберцового нерва, при травмах, после инсультов, травм спинного мозга, детского церебрального паралича, нейроинфекции и опухолей спинного мозга;

Результат применения:

-фиксация стопы, голеностопного сустава и верхней трети голени в функционально выгодном положении;

-ортез предназначен для ношения в обуви.

Изготовлен из пластика. Пластиковая рама (гильза) охватывает голень в области икроножной мышцы и переходит в пластиковую полустельку. Пластиковая полустелька имеет поддержку внутреннего продольного свода и высокие бортики для стабилизации естественного положения стопы. Два ремня с застежкой-липучкой: один с мягкой прокладкой фиксируется на гильзе голени, второй ремень может крепиться как над лодыжками, так и на подъеме стопы. Предназначен для людей весом не более 110 кг.

Масса изделий составляет 150-200. в зависимости от размера.

Цвет: белый, бежевый, черный, серый, синий. **Размеры:** S,M,L,XL правый/левый (подбирается по размеру обуви).

Состав изделия: 45% - полипропилен, 30%- нейлон, 5%- сополимер этилена и венилацетата, 5%- вспененный полиуретан, 5%- хлопок, 2 ленты-липучки.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на голеностопный сустав регулируемый удлиненный OA-313 серийный номер 039)

Ортез на голеностопный сустав не регулируемый укороченный OA-314 серийный номер 040)

Показания:

-ранняя функциональная терапия при повреждениях связок голеностопного сустава, травмах лодыжек, внутрисуставных переломах и реконструктивных операциях;

-повреждения ахиллова сухожилия;

-параличи и парезы стопы;

-послеоперационная и консервативная терапия переломов голени и стопы.

Результаты применения:

- дозированная нагрузка на сустав в послеоперационном периоде;
- обеспечивает разгрузку стопы;
- позволяет фиксировать положение тыльного или подошвенного сгибания.

Изготовлен из двух металлических шин с регуляторами объема движений (возможность выставлять угол сгибания-разгибания или необходимый диапазон движений в суставе с шагом 10 градусов). Три манжеты на голени и две манжеты на стопе с застежками-липучками для регулирования степени прилегания ортеза к телу. Оснащен подошвой с перекатом, которая обеспечивает пациенту почти нормальную походку. Имеется съемный носочек на застежке-липучке для использования в холодную погоду. ОА-313 имеет удлиненную манжету, что позволяет его использовать людям высокого роста. ОАГ – ОА-314, имеет укороченную манжету, что позволяет использовать его людям низкого роста.

Масса изделий составляет 3500-4000 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, бежевый, синий, серый. **Размер:** S,M,L,XL (подбирается по размеру обуви).

Состав изделий: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

 OPD	Фиксатор большого пальца стопы	Код ОКП: 93 9670	
		размер	Универсальный
 FA-11	Ортез-фиксатор голеностопа в форме 8-образной повязки S,M,L,XL	Код ОКП: 93 9670	
		размер	Окружность голени выше костей лодыжки
	Ортез на	S	15-20
		M	20-25
		L	25-30
		XL	более30
		Код ОКП: 93 9670	
		размер	Окружность



OA-11



OA-12



OA-13

голеностопный сустав
эластичный
XS,S,M,L,XL,XXL

Ортез на
голеностопный сустав
эластичный, с
липучкой
S,M,L,XL,XXL

Ортез на
голеностопный сустав
высокой эластичности
S,M,L,XL,XXL

	голени выше костей лодыжки
XS	до 15
S	15-20
M	20-25
L	25-30
XL	30-35
XXL	более 35



OAR-11



Ортез на
голеностопный сустав
эластичный усиленный
S,M,L,XL,XXL

Ортез на
голеностопный сустав
туго-эластичный, с
ребрами жесткости
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружностм голени выше костей лодыжки
S	15-20
M	20-25
L	25-30
XL	30-35
XXL	более 35

OAR-12



Ортез на
голеностопный сустав
эластичный
усиленный, с липучкой
S,M,L,XL,XXL

OAR-13



OAS-11



OAS-12



OAS-13


Ортез на
голеностопный сустав
эластичный, с
силиконовыми
вставками
S,M,L,XL,XXL

Ортез на
голеностопный сустав
эластичный, с
силиконовыми
вставками и липучкой
S,M,L,XL,XXL

Ортез на
голеностопный сустав
высокой эластичности,
с силиконовыми
вставками
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность голени выше костей лодыжки
S	15-20
M	20-25
L	25-29
XL	29-34
XXL	более 34

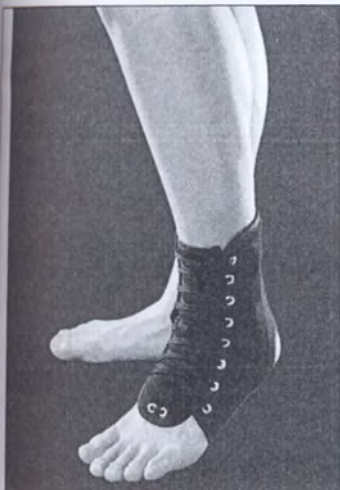

0A-21

Ортез на голеностопный сустав со шнуровкой жесткой фиксации
S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность голей и выше костей лодыжки
S	17-20
M	20-23
L	23-26
XL	26-28



0A-22

Ортез на голеностопный сустав со шнуровкой мягкой фиксации
S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670




0AP-311

Ортез на голеностопный сустав (пневмошина)
Универсальный


Ортез на голеностопный сустав (стоподержатель)
S,M,L,XL (правый, левый)

Код ОКП: 93 9670

размер	размер мужской обуви	размер женской обуви
S	35-38	до 37
M	39-43	37-39
L	43-45	39-42
XL	45-47	43-45

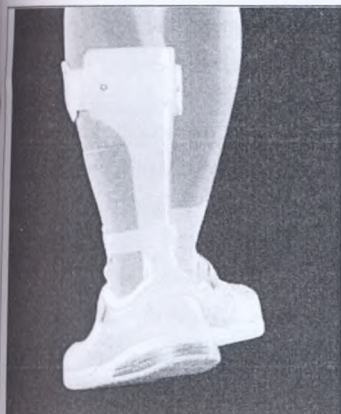

OAS-312

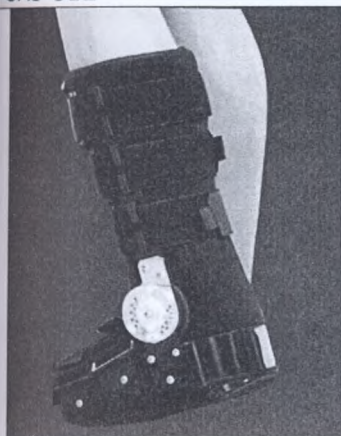

OA-313



OA-314

Ортез на
голеностопный сустав
регулируемый,
удлиненный
S,M,L,XL

Ортез на
голеностопный сустав
нерегулируемый,
укороченный
S,M,L

Код ОКП: 93 9670

размер	размер обуви (европейской)
S	до 37
M	37-41
L	41-44
XL	более 44

Ортез для тазобедренного сустава ОТ-11 (правый/левый) (серийный номер 041)

Показания:

- нестабильность тазобедренного сустава;
- период реабилитации после операций, вправлений вывихов бедра, повреждения связочно-мышечного аппарата;
- предупреждение травм тазобедренных суставов, шейки бедра; профилактика и лечение расшатывания эндопротеза тазобедренного сустава.

Результат применения:

- жесткая фиксация тазобедренного сустава с возможностью регулирования угла сгибания-разгибания и приведение-отведение.
- предотвращение развития контрактур и гипотрофии мышц.

Изготовлен из пластиковой панели, оснащенные мягкими текстильными вкладками и двумя лентами-липучками, а так же одним основным ремнем. Благодаря

особенностям ортез легко монтируется на правый и левый тазобедренный сустав. Современный высокотехнологический шарнир обеспечивает возможность независимой регулировки объема сгибания-разгибания с шагом в 10 градусов и приведение-отведение в диапазоне от минус 5 до 40 градусов.

Масса изделий составляет 2000-2500 гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, бежевый, черный, синий. **Размеры:** S,M,L,XL,XXL (размер подбирается по обхвату бедер).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез для тазобедренного сустава из аэропрена с ребрами жесткости OT-21 (правый/левый) (серийный номер 042)

Показания:

- период реабилитации после реконструктивных операций (эндопротезирование, артропластика и др.);
- изолированные краевые прямые, отрывные, неполные переломы большого вертела (по согласованию лечащего врача);
- вколоченные переломы шейки бедра, в том числе у пациентов пожилого возраста;
- дегенеративно-дистрофические изменения в тазобедренном суставе (асептический некроз головки бедра, кистовидная перестройка, коксартроз и др.);
- артропатия;
- повреждение мышечно-связочного аппарата, вправленный вывих, в том числе при спортивной травме;
- при длительных физических и спортивных нагрузках.

Результат применения:

- ортез обеспечивает фиксацию, стабилизацию и частичную разгрузку тазобедренного сустава;
- улучшение координации работы мышц;
- ортез можно использовать в сочетании с медицинским компрессионным трикотажем;
- при занятиях ЛФК бандаж можно не снимать.

Изготовлен из аэропрена – мягкого, воздухопроницаемого высокоэластичного неопрена с дополнительными перфорационными отверстиями по всей поверхности. В тазовом компоненте конструкции в зависимости от размера использованы 3-4 гибких металлических, параллельно расположенных ребра жесткости, а также эластичная стяжка для регулировки натяжения конструкции в области таза. Обхват и степень фиксации бедренного компонента также осуществляется за счет эластичной стяжки. На стяжке тазового и бедренного компонентов располагается лента-индикатор натяжения. Закрепление пояса осуществляется с помощью двух застёжек-липучек.

Масса изделий составляет 550-700гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, бежевый, белый. **Размер:** XS,S,M,L,XL (обхват по тазовому кольцу (измеряется на 5 см ниже пупка, см)).

Состав изделия: 30%-неопрен, 27%-хлопок, 23%-эластик, 20%-лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез отводящий на тазобедренный сустав О-21(серийный номер043)

Показания:

- врожденный вывих бедра;
- дисплазия тазобедренного сустава;
- подвывих бедра.

Результат применения:

- фиксация тазобедренного сустава в функционально выгодном положении без нагрузки на плечевой пояс и позвоночник ребенка;
- способствует правильному формированию и развитию вертлужной впадины у детей с дисплазией тазобедренного сустава;
- обеспечивает фиксацию бедер в положении сгибания и отведения под углом 90 градусов и больше.

Изготовлен из гипоаллергенных, не вызывающих раздражение кожи полимерных материалов.

Масса изделий составляет 100-150 гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, черный, бежевый. **Размер:** XS,S,M,L (возраст ребенка).

Состав изделия: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и винилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Отводящий ортез на тазобедренный сустав усиленный ОТ-31(серийный номер044)

Показания:

- дисплазия тазобедренных суставов;
- подвывих бедра;
- врожденный вывих бедра;
- реабилитация в послеоперационном периоде.

Результат применения:

- обеспечивает фиксацию тазобедренных суставов без нагрузки на плечевой пояс и позвоночник ребенка.

Изготовлен из пластика с применением металлоконструкции. Внутри имеются мягкие прокладки.

В модели можно этапно менять положение отведения в тазобедренном суставе с шагом 10градусов. Регулируемая конструкция позволяет 6 месяцев увеличивать объем пояса шины вслед за ростом ребенка без перехода к следующему размеру. Масса изделий составляет в зависимости от размера.

Цвет: белый, черный, серый, бежевый. **Размер:** S,M,L (расстояние между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах, см).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, 3 ленты-липучки.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.



OT-11

Ортез для
тазобедренного
сустава
(правый/левый)
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Обхват бедер, см
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130



OT-21

Ортез для
тазобедренного
сустава из аэропрена с
ребрами жесткости
правый/левый
XS,S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670

размер	(обхват по тазовому кольцу (на 5 см ниже пупка), см)
XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120



O-21

Ортез отводящий на
тазобедренный сустав
XS,S,M,L

Код ОКП: 93 970

размер	возраст ребенка, мес.
XS	3-6
S	6-12
M	12-24
L	24-30



OT-31

Отводящий ортез на тазобедренный сустав усиленный

Код ОКП: 93 9670

размер	расстояние между подколенным и ямками в положении отведения в тазобедренных суставах, см
S	16-20
M	21-30
L	31-40

Фиксаторы верхней конечности

Ортез на плечевой сустав и руку универсальный OS-21 (серийный номер 045)

Показания:

- ушибы, вывихи и переломы плеча и локтевого сустава;
- несложные переломы ключицы;
- парезы и параличи верхней конечности;
- острые и хронические воспалительные заболевания суставов верхней конечности (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты);
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности.

Результат применения:

- ортез разгружает плечевой сустав, позволяет верхней конечности принять физиологически выгодное положение. Эффективен и универсален после травм руки любой локализации. Верхняя конечность надежно фиксируется и постоянно находится в оптимальном положении.

Изготовлен из очень прочного комбинированного материала, большей частью состоящего из полиуретановой пены. Оснащен опорной «муфтой» для фиксирования руки и двумя наплечными регулируемыми лямками оснащенные застежками-липучками.

Масса изделий составляет 450-500 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, бежевый, синий, серый.

Размеры: S/M,L/XL (измерение окружности грудной клетки вместе с прижатой к грудной клетке рукой, см).

Состав изделия: 30%-неопрен, 27%-хлопок, 23%-эластик, 20%-лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на плечевой сустав и руку косыночный, вентилируемый OS-11(серийный номер 046)

Ортез на плечевой сустав и руку косыночный, облегченный OS-12(серийный номер 047)

Ортез на плечевой сустав и руку косыночный, универсальный OS-13(серийный номер 048)

Показания:

- ушибы, вывих, подвывихи и переломы костей верхней конечности;
- парезы и параличи верхней конечности;
- острые и хронические воспалительные заболевания суставов верхней конечности (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты);
- повреждения связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава.

Результат применения:

- ортез на плечевой сустав и руку косыночный широко применяется как самостоятельный способ иммобилизации, так и в сочетании с другими ортезами на суставы или традиционными гипсовыми повязками.

Простая и эффективная конструкция обеспечивает фиксацию и разгрузку суставов верхней конечности в поддерживающей «муфте» для оптимизации положения руки. Ортез OS-11 состоит из «муфты», выполненного из прочного сетчатого материала, с высокой воздухо- влаго-проницаемостью; OS-12 выполнен из микро-сетчатого материала; ортез АРК-1/3 изготовлен из прочного водоотталкивающего материала, мягких наплечных и поясных ремней; обеспечивают полное прилегание руки к телу. Длина ремней регулируется за счет двух застежек-липучек.

Масса изделий составляет 30-55 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, синий, бежевый, серый.

Размеры: OS-11: S,M,L,XL; OS-12: S/M,L/XL; OS-13: универсальный (измерение длины предплечья от локтевого отростка до плюсне-фалангового сустава, см).

Состав изделий: 13%-хлопок, 50%-полиэстер, 37%-эластик.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Реклинатор средней фиксации R-2 (серийный номер 049)

Реклинатор мягкой фиксации R-1 (серийный номер 050)

Реклинатор облегченный R-3(серийный номер 051)

Показания:

- нарушения осанки легкой степени;
- состояния после оперативного вмешательства травм ключицы;
- реабилитация после травм ключицы;
- остеопороз, остеохондроз верхнегрудного отдела позвоночника, спондилопатии легкой степени;
- повреждения и заболевания акромиально-ключичного сочленения.

Результат применения:

- надежная фиксация плечевого пояса во время лечения и реабилитации после травм и операций на верхнегрудном отделе позвоночника и ключице;
- коррекция начальных форм нарушения осанки и легких нефиксированных деформаций в верхнегрудном отделе позвоночника.
- реклинатор разводит пояс верхних конечностей, разгружает тела позвонков верхнегрудного отдела позвоночника не снижая нормального тонуса мышц;
- эффективно формирует стереотип правильной осанки.

R-2 состоит из круглого межлопаточного пелота и двух мягких наплечных лямок фиксирующихся застежками-липучками; R-1 состоит из прямоугольного мягкого пелота и двух наплечных лямок; R-3 состоит из двух тонких наплечных лямок, соединенных между собой на спине крючково-петельным способом.

Масса изделий составляет 55-60 гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, черный, бежевый, синий, серый.

Размер: R-2 – универсальный; R1, R-3 – S,M,L,XL.

Состав изделий: R-1, R-2: 30%-неопрен, 27%-хлопок, 23%-эластик, 20%-лайкра.

R-3: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и венилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок.

Условия хранения: реклинаторы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: реклинаторы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования реклинатора дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования реклинатора без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи реклинатора при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на плечевой сустав регулируемый OSR-21(универсальный) (серийный номер 052)

Ортез на плечевой сустав OSR-22 (универсальный) (серийный номер 053)

Показания:

- хронические воспалительные заболевания плечевого сустава (артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты и периартрозы, артрозы ключично-акромиального сочленения);
- воспалительные заболевания сустава и нервных сплетений;
- реабилитационный период после травм (ушибы, привычные частые вывихи плечевого сустава);
- реабилитация после переломов и оперативных вмешательств в области сустава;
- профилактика травм при занятиях спортом и производственных нагрузках на сустав.

Результат применения:

- равномерная легкая компрессия, способствующая уменьшению отека и улучшение кровообращения в мягких тканях прилегающих к суставу;
- обеспечивает среднюю степень фиксации сустава;
- снижение болевого синдрома;
- ортез сохраняет тепло, улучшает кровообращение, способствует увеличению кислорода в тканях;
- усиливает лечебный эффект применяемых лекарственных средств;
- разогрев мышц перед тренировками.

Изготовлен из неопрена, обладающего теплосберегающим свойством, не препятствуя дыханию кожи, обеспечивает плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Ортез OSR-21 состоит из разъемной манжеты и разъемной дополнительной фиксирующей одной лямки с застежкой липучкой. Ортез OSR-22 состоит из разъемной манжеты и не разъемной одной лямки липучки, которая фиксируется вокруг тела. Манжета ортеза разъемная, что позволяет легко зафиксировать изделие и отрегулировать фиксацию по объему бицепса.

Масса изделий составляет 90- 105гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, бежевый, синий, серый. Размеры: OSR-21- S/M, L/XL; OSR-22- S,M,L,XL (измерение окружности грудной клетки на уровне подмышечных впадин, см)

Универсальный: на правый и левый плечевой сустав.


Состав изделий: 30%-неопрен, 27%-хлопок, 23%-эластик, 20%-лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

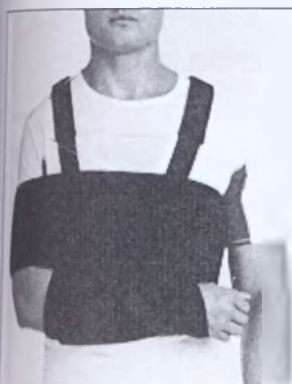

OS-21

Ортез на плечевой сустав и руку универсальный

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность грудной клетки с прижатой рукой (см)
S/M	до 100
L/XL	более 100



OS-11

Ортез на плечевой сустав и руку косыночный, вентилируемый S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670

размер	Длина предплечья (см)
S	30-33
M	33-36
L	36-39
XL	более 39

Ортез на плечевой

Код ОКП: 93 9670



OS-12



OS-13

сустав и руку
косыночный,
облегченный
S/M,L/XL

Ортез на плечевой
сустав и руку
косыночный,
универсальный.
Р-р универсальный

размер

Универсаль-
ный



R-2



R-1

Реклинатор
средней фиксации

Реклинатор
мягкой фиксации
S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670


размер

Универсаль-
ный



R-3

Реклинатор облегченный
S,M,L,XL

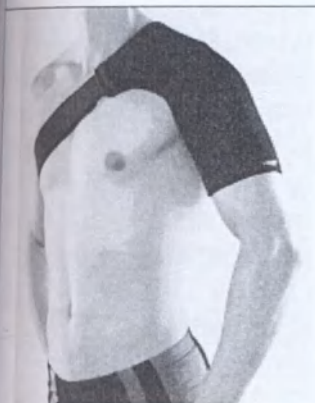

OSR-21

Ортез на плечевой
сустав регулируемый
(универсальный)
S/M,L/XL



OSR-22

Ортез на плечевой
сустав (универсальный)
S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность грудной клетки на уровне подмышечно й впадины (см)
S/M	до 90
L/XL	более 90

размер	Окружность грудной клетки на уровне подмышечно й впадины (см)
S	75-80
M	80-85
L	85-90
X	90-95

Ортез универсальный на локтевой сустав OEU-11(серийный номер 054)

Ортез универсальный на локтевой сустав, упруго-эластичный OEU-12
(серийный номер 055)

Показания:

- лечение и профилактика эпикондилитов (синдром теннисного локтя);
- профилактика травматизма при ротационных нагрузках на локтевой сустав;

болевого синдром.

Результат применения:

фиксация сухожилий латерального и медиального надмыщелков локтевого сустава;
равномерная компрессия области надмыщелков сустава;
снятие болевого синдрома;

Изготовлен из современных гигиенических материалов. Состоит из манжеты, комфортно облегающей мягкие ткани локтевого сустава и гелевой подушки, которая фиксируется на область надмыщелков. Снабжен дополнительной затяжкой оснащенной одной застежкой липучкой для регулирования степени компрессии мягких тканей локтевого сустава.

- OEU-12 имеет дополнительную вкладку обеспечивающее более сильную фиксацию надмыщелка;

- OEU-11, несскользящая основа поддерживает правильную компрессию в положении движения сустава.

Масса изделий составляет 35-40 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, бежевый, синий, серый. **Размер:** универсальный.

Состав изделий: OEU-11: 30%-неопрен, 27%-хлопок, 23%-эластик, 20%-лайкра.

OEU-12: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и венилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на локтевой сустав эластичный OEE-11 (серийный номер 056)

Ортез на локтевой сустав эластичный, с липучкой OEE-12 (серийный номер 057)

Ортез на локтевой сустав высокой эластичности OEE-13 (серийный номер 058)

Показания:

- профилактика повреждений локтевого сустава при занятиях спортом;
- ушибы, травмы плечевого сустава;
- растяжения мышц и связок;
- болевого синдром при хронических заболеваниях суставов;
- профилактика переохлаждения суставов при работе в сложных климатических условиях.

Результат применения:

- согревает сустав и прилежащие ткани;
- обладает микромассажным эффектом и компрессией;
- обеспечивает фиксацию суставов;
- уменьшает болевой синдром;
- разгружает мышцы и связки плечевого сустава.

Изготовлен из эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Полотно выполнено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. Изделия OEE-12 имеет дополнительную одну лямку липучку, которое обеспечивает более плотную фиксацию. Полотно изделия OEE-13 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облегание и правильное распределение давления. Воздухопроницаемое влагоотводящее способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, сохраняет тепло и улучшает кровообращение в суставе.

Масса изделий составляет 40-55гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** XS,S,M,L,XL, (измерение окружности локтевого сустава, см).

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на локтевой сустав туго-эластичный усиленный ОЕН-21(серийный номер 059)

Ортез на локтевой сустав туго-эластичный, с липучкой ОЕН-22(серийный номер 060)

Ортез на локтевой сустав высокой эластичности, с силиконовой вставкой ОЕН-23 (серийный номер 061)

Показания:

- хронические воспалительные заболевания локтевого сустава (артрозы, артриты);
- воспалительные заболевания сустава (эпикондилиты, «локоть гольфиста», «локоть теннисиста»);
- реабилитационный период после травм (ушибы, привычные частые вывихи плечевого сустава);
- реабилитация после переломов и оперативных вмешательств в области сустава;
- профилактика травм при занятиях спортом и производственных нагрузках на сустав.

Результат применения:

- обеспечивает среднюю степень фиксации сустава;
- снижение болевого синдрома;
- ортез сохраняет тепло, улучшает кровообращение, способствует увеличению кислорода в тканях;
- компрессионный эффект, способствующий устранению отеков;
- восстановительный массаж рецепторов.

Особенность: ОЕН-21, ОЕН-23 анатомическая форма ортезов и две дополнительные гелевые подушки надежно фиксированные к ткани, обеспечивают оптимальное прилегание бандажа к суставу, постоянную защиту костных выступов от ушибов и интенсивную стимуляцию проприоцепторов. Плотное ОЕН-23 выполнено из высоко-эластичного материала. Изделие ОЕН-22 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облевание и правильное распределение давления, имеет дополнительную одну лямку-липучку, которая обеспечивает более плотную фиксацию.

Масса изделий составляет 70-85 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** S,M,L,XL,XXL (измерение окружности локтевого сустава, см).

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на локтевой сустав с регулятором угла сгибания OER-31 (серийный номер 062)

Показания:

- ранняя функциональная терапия при внутрисуставных переломах в локтевом суставе;
- консервативная терапия вывихов локтевого сустава;
- поэтапное регулируемое расширение объема движений в локтевом суставе при реабилитации после повреждений и восстановительных хирургических операций;
- реабилитационные мероприятия после эндопротезирования локтевого сустава;
- иммобилизация после восстановительных процедур.

Результат применения:

- фиксация локтевого сустава;
- стабилизация и возможность дозированных движений локтевого сустава;
- с помощью угломера задаются параметры объема движений, что позволяет предотвратить развитие контрактур и гипотрофию мышц.

Состоит из:

- двух манжет из синтетического материала с тканевым покрытием на предплечье и плечо;
 - двух металлических шин с шарниром, регулирующим объем движений с шагом 10 градусов;
 - четырех ремней с застежками-липучками;
- каждый шарнир снабжен мягкой текстильной подушечкой для плотного прилегания ортеза к суставу и комфортного ношения.

Масса изделий составляет 2000-2500 гр. в зависимости от размера.

Цвет: черный, белый, бежевый, синий, серый. **Размер:** универсальный.

Состав изделий: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.



OEU-11

Ортез универсальный на локтевой сустав

Код ОКП: 93 9670

размер	Универсальный
--------	---------------



OEU-12

Ортез универсальный на локтевой сустав, упруго-эластичный



OEE-11

Ортез на локтевой сустав эластичный

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность локтевого сустава (см)
XS	до 24
S	24-26
M	26-28
L	28-31
XL	более 31



OEE-12

Ортез на локтевой сустав эластичный, с липучкой



OEE-13

Ортез на локтевой сустав высокой эластичности



ОЕН-21

Ортез на локтевой сустав туго-эластичный усиленный

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность локтевого сустава (см)
S	до 26
M	26-28
L	28-31
XL	31-35
XXL	более 35




ОЕН-22

Ортез на локтевой сустав туго-эластичный, с липучкой



ОЕН-23

Ортез на локтевой сустав высокой эластичности с силиконовой вставкой

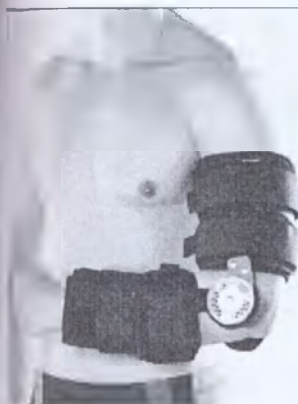

ОЕР-31

Ортез на локтевой сустав с регулятором угла сгибания

Код ОКП: 93 9670

размер	Универсальный
--------	---------------

Ортез на лучезапястный сустав туго-эластичный ОНЕ-11 (серийный номер 063)

Ортез на лучезапястный сустав эластичный ONE-12 (серийный номер 064)

Ортез на лучезапястный сустав эластичный, с липучкой ONE-13 (серийный номер 065)

Показания:

- профилактика повреждений лучезапястного сустава при занятиях спортом;
- ушибы, травмы лучезапястного сустава;
- растяжения мышц и связок;
- болевого синдрома при хронических заболеваниях суставов;
- профилактика переохлаждения суставов при работе в сложных климатических условиях.

Результат применения:

- согревает сустав и прилежащие ткани;
- обладает микромассажным эффектом и компрессией;
- обеспечивает фиксацию суставов;
- уменьшает болевой синдром;
- разгружает мышцы и связки лучезапястного сустава.

Изготовлен из эластичного материала, создающего компрессию выше 2-го класса, обеспечивающую плотное прилегание изделия и необходимое воздействие на сустав. Полотно выполнено специальной вязкой с участками разной плотности согласно анатомическому строению сустава. ONE-13 имеет одну лямку липучку, которое обеспечивает более плотную фиксацию. Полотно изделия ONE-11 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облежание и правильное распределение давления. Изделия воздухопроницаемые, влагоотводящие, способствуют интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, согревающее трикотажное полотно сохраняет тепло и улучшает кровообращение в суставе.

Масса изделий составляет 25-35 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, синий, черный. **Размеры:** ONE-11 - S,M,L,XL,XXL; ONE-12, ONE-13 - S,M,L,XL (измерение окружности лучезапястного сустава, см).

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на лучезапястный сустав туго-эластичный с гелевой вставкой OHG-21 (серийный номер 066)

Ортез на лучезапястный сустав высокой эластичности OHG-22 (серийный номер 067)

Ортез на лучезапястный сустав высокой эластичности с гелевыми вставками OHG-23 (серийный номер 068)

Показания:

- травмы, ушибы, повреждения лучезапястного сустава;
- синовит и отеки при воспалительных заболеваниях сустава и сухожилий;
- реабилитация после оперативных вмешательств и травм лучезапястного сустава
- профилактика травматизма при занятиях спортом и физических нагрузках.

Результат применения:

- обеспечивает среднюю степень фиксации сустава;
- снижение болевого синдрома;

ортез сохраняет тепло, улучшает кровообращение, способствует увеличению кислорода в тканях;

- компрессионный эффект, способствующий устранению отеков;

- восстановительный массаж рецепторов.

Особенность: специальная гелевая подушечка OHG-21 и OHG-23, надежно зафиксированная на ткани, обеспечивает оптимальное прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту шиловидного отростка локтевой кисти и интенсивную стимуляцию проприоцепторов. Один дополнительный съемный эластичный ремень-фиксатор позволяет установить нужный уровень давления на область запястья. OHG-21 выполнен из высокотехнологического туго-эластичного материала, обеспечивающее плотную, комфортную фиксацию. Полотно изделия OHG-23 имеет разнонаправленное плетение, обеспечивающее прекрасное облежание и правильное распределение давления.

Масса изделий составляет 25-40гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** S, M, L, XL, XXL (измерение окружности лучезапястного сустава, см).

Состав изделий: 67% - нейлон, 23% - эластик, 10% лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на первый пястно-фаланговый сустав туго-эластичный усиленный OMR-21 (серийный номер 069)

Ортез на первый пястно-фаланговый сустав туго-эластичный OMR-22 (серийный номер 070)

Ортез на первый пястно-фаланговый сустав средне эластичный OMR-23 (серийный номер 071)

Показания:

- травмы, ушибы, вывихи лучезапястного, запястно-пястного и пястно-фалангового суставов 1-го пальца кисти
- артрозы и ревматические поражения лучезапястного, запястно-пястного и пястно-фалангового суставов;
- ревматоидный артрит;
- недостаточность связочного аппарата сустава 1-го пальца кисти.

Результат применения:

- обеспечивает сильную фиксацию лучезапястного, запястно-пястного и пястно-фалангового суставов 1-го пальца кисти;
- способствуя снижению болевого синдрома;
- металлическая шина фиксирует первый пястно-фаланговый сустав в заданном положении, что позволяет сохранить возможность кистевого хвата и проводить ранее функциональное лечение (ЛФК);
- компрессионный эффект и теплосберегающие свойства бандажа улучшают кровообращение, способствуя уменьшению отека и ускорению выздоровления;
- снижение болевого синдрома.

Особенность: ортез изготовлен из эластичного гипоаллергенного неопрена. В конструкции OMR-21 и OMR-23 используется изгибаемая металлическая шина для фиксации первого пястно-фалангового сустава. Степень компрессии регулируются за счет одной манжеты с застежкой-липучкой. OMR-22 выполнен из плотного неопрена, более плотно фиксирующего лучезапястный сустав.

Масса изделий составляет 25-40гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размер:** универсальный.

Состав изделий: 30% - неопрен, 27% - хлопок. 23% - эластик, 20% - лайкра.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на лучезапястный сустав жесткой фиксации, регулируемый ОС-311
(серийный номер 072)

Ортез на лучезапястный сустав жесткой фиксации, эластичный ОС-312(серийный номер 073)

Ортез на лучезапястный сустав полужесткой фиксации ОС-313 (серийный номер 074)

Показания:

- иммобилизация и снижение болевого синдрома после травм и операций на лучезапястном суставе, при повреждении связок и сухожилий лучезапястного сустава, трещинах и переломах костей предплечья;
- травматические нейропатии периферических нервов (в частности, туннельный синдром и стиллоидит), параличи и парезы лучевого нерва при поражении ЦНС;
- воспаления лучезапястного сустава и близлежащих мягких тканей (артриты, тендовагиниты, миозиты);
- ревматические поражения лучезапястного сустава;
- профилактика возникновения сгибательных контрактур кисти;
- профилактика травм лучезапястного сустава (растяжения, разрывы связок, ушибы и др.) при нагрузках на сустав.

Результат применения:

- обеспечивает полную фиксацию лучезапястного сустава;
- конструкция ортеза позволяет сохранить возможность кистевого хвата и проводить раннее функциональное лечение (ЛФК);
- компрессионный эффект и теплосберегающие свойства ортеза на лучезапястный сустав улучшают кровообращение, способствуя уменьшению отека и ускорению выздоровления;
- ограничение подвижности снижает болевой синдром.

Особенность:

Прочный полимерный материал, индивидуально изгибаемая металлическая шина обеспечивают сильную фиксацию. ОС-311 оснащен одной удлиненной лямкой, которая позволяет зафиксировать изделие в три оборота. ОС-312 дополнительно фиксируется одной широкой эластичной лямкой-липучкой. ОС-313 оснащен дополнительной металлической шиной с латеральной стороны кисти. Сочетание свойств эластичности и упругости обеспечивают сильную степень фиксации сустава.

Масса ОС-311 составляет 90-110гр. в зависимости от размера.

Масса ОС-312 составляет 100-125 гр. в зависимости от размера.

Масса ОС-313 составляет 200-250гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** ОС-311 -S,M,L,XL,XXL; ОС-312, ОС-313 – S/M,L/XL (измерение окружности лучезапястного сустава, см). Правый, левый.

Состав изделий: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на лучезапястный сустав универсальный ОС-321 (серийный номер 075)

Ортез на лучезапястный сустав универсальный усиленный ОС-322 (серийный номер 076)

Ортез на лучезапястный сустав универсальный усиленный, регулируемый ОС-323 (серийный номер 0767)

Показания:

- хронические воспалительные заболевания лучезапястного сустава (артриты, артрозы);
- повреждения связок и сухожилий лучезапястного сустава;
- нестабильность лучезапястного сустава легкой и средней степени (привычный вывих);
- повреждения связок и суставов;
- травмы, послеоперационный период;
- травматические нейропатии периферических нервов;
- повышенные спортивные и производственные нагрузки;
- профилактика сгибательных контрактур кисти.

Результат применения:

- ограничивает подвижность и обеспечивает сильную фиксацию лучезапястного сустава;
- снижает болевой синдром;
- способствуя уменьшению отеков и ускорению выздоровления;

Особенность:

- ОС-322 изготовлен из высоко-эластичного материала, в состав которого входит бамбуковый древесный уголь; хорошо впитывает влагу, дезодорирует и поглощает токсические вещества;
- широкая металлическая шина фиксирует лучезапястный сустав в нужном положении;
- ортез ОС-321 изготовлен из аэропрена; сберегает тепло тела, в то же время обеспечивает влаго-воздухообмен, повышая комфортность ношения ортеза;
- ортез ОС-323 усиленный, степень натяжения регулируется двумя лямками-липучками; высокая лечебная эффективность обеспечена надежной фиксацией шины и применение полимерного материала, обладает высокой износостойкостью, отличается равной растяжимостью и «памятью формы».
- два фиксирующих ремня с застежкой-липучкой обеспечивают плотное прилегание ортеза к руке;
- универсален: для правой и левой руки.

Масса ОС-321 составляет 100-150. в зависимости от размера.

Масса ОС-322 составляет 160 гр.

Масса ОС-323 составляет 160 гр.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** ОС-321, ОС-323 - S,M,L,XL (измерение окружности лучезапястного сустава, см);
ОС-322 – универсальный.

Состав изделий: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем описано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез на лучезапястный и первый пястно-фаланговый суставы, регулируемый OHR-31 (серийный номер 078)

Ортез на лучезапястный и первый пястно-фаланговый суставы, эластичный облегченный OHR-32 (серийный номер 079)

Ортез на лучезапястный и первый пястно-фаланговый суставы, усиленный OHR-33 (серийный номер 080)

Показания:

- ушибы, вывихи лучезапястного, запястно-пястного и первого пястно-фалангового суставов, состояния после операций на суставах большого пальца и лучезапястном суставе;
- повреждения связок и сухожилий лучезапястного сустава, запястно-пястного и первого пястно-фалангового суставов;
- нестабильность лучезапястного сустава (привычный вывих);
- воспаление лучезапястного сустава и близлежащих мягких тканей (артриты, тендовагиниты, миозиты);
- травматические нейропатии периферических нервов параличи и парезы лучевого нерва при поражении ЦНС;
- ревматическое поражение лучезапястного сустава;
- профилактика возникновения сгибательных контрактур кисти.

Результат применения:

- полную степень фиксации лучезапястного сустава, предплечья и большого пальца в положении отведения;
- поддерживает сухожилия сгибателей и разгибателей кисти;
- сохраняет возможность кистевого хвата для функциональной терапии лучезапястного сустава;
- способствует уменьшению отека, снимает болевой синдром.

Особенность:

- ортезы изготовлены из эластичного «дышащего» материала, эффективно поддерживающий температурный баланс.
- ортез OHR-31 усилен двумя металлическими шинами фиксирующие лучезапястный сустав, предплечье и суставы 1-го пальца кисти в заданном положении. Степень отведения 1-го пальца можно регулировать. Оснащен 4 лямками-липучками.
- ортез OHR-32 усилен одной металлической пластиной фиксирующей сустав 1-го пальца кисти; оснащен 2 лямками-липучками.
- ортез OHR-33 усиленный на лучезапястный (и первый пястно-фаланговый) суставы обеспечивает полную степень фиксации лучезапястного сустава, предплечья и большого пальца в положении отведения, поддерживает сухожилия сгибателей и разгибателей кисти; конструкция ортеза позволяет сохранить возможность кистевого хвата для функциональной терапии лучезапястного сустава, оснащен 3 лямками-липучками.
- ремни-фиксаторы позволяет регулировать степень давления на сустав, способствуя уменьшению отека.
- по показаниям врача можно использовать вместо гипсовой повязки.

Масса изделий составляет 100-150 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, бежевый, белый, черный, синий. **Размеры:** OHR-31, OHR-33 - S,M,L,XL (измерение окружности лучезапястного сустава, см); OHR-32 - универсальный. Правый/левый.

Состав изделий: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предусмотрено курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.



ONE-11

Ортез на лучезапястный сустав туго-эластичный

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность лучезапястного сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-24
XXL	более 24



ONE-12

Ортез на лучезапястный сустав эластичный

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность лучезапястного сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-24



ONE-13

Ортез на лучезапястный сустав эластичный, с липучкой

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность лучезапястного сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-24



OHG-21

Ортез на лучезапястный сустав туго-эластичный, с гелевой вставкой

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность лучезапястного сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	более 26



OHG-22

Ортез на лучезапястный сустав высокой эластичности

новинка



OHG-23

Ортез на лучезапястный сустав высокой эластичности с гелевыми вставками



OMR-21

Ортез на первый пястно-фаланговый сустав, туго-эластичный усиленный

Код ОКП: 93 9670

размер	Универсальный
--------	---------------

Ортез на первый пястно-фаланговый

размер	Окружность лучезапястного сустава
--------	-----------------------------------



OMR-22

сустав, туго-эластичный

	ого сустава (см)
S/M	17-21
L/XL	21-26



OMR-23

Ортез на первый
пьятно-фаланговый
сустав, средне-
эластичный

размер	Универсальный
--------	---------------



OC-311

Ортез на лучезапястный
сустав жесткой
фиксации, регулируемый

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность лучезапястн ого сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	более 26

Ортез на лучезапястный
сустав жесткой
фиксации, эластичный

размер	Окружность лучезапястн ого сустава (см)
S/M	17-21
L/XL	21-26



OC-312

ОУПЧМА



OC-313

Ортез на лучезапястный
сустав полужесткой
фиксации

размер	Окружность лучезапястн ого сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	более 26



OC-321

Ортез на лучезапястный
сустав универсальный

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность лучезапястно го сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26

Ортез на лучезапястный
сустав усиленный

размер	Универсальный
--------	---------------



OC-322

ПОВЫШЕНА



OC-323

Ортез на лучезапястный сустав универсальный, усиленный регулируемый

размер	Окружность лучезапястно го сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26



ОНР-31

Ортез на лучезапястный и первый пястно-фаланговый суставы, регулируемый, (правый, левый)

Код ОКП: 93 9670


размер	Окружность лучезапястно го сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	более 22



ОНР-32

Ортез на лучезапястный и первый пястно-фаланговый суставы, эластичный облегченный

размер	Универсальный
--------	---------------

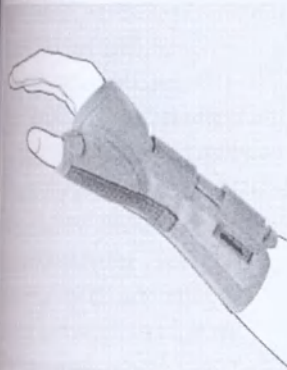

ОНР-33

Ортез на лучезапястный и первый пястно-фаланговый суставы, усиленный

размер	Окружность лучезапястного сустава (см)
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	более 22

Ортез мягкий поддерживающий для шейных позвонков (взрослый/детский) ССА-1, ССВ-1 (серийный номер 081 и 082)

Показания: применяется при

- мышечной кривошеи;
- травмах шейного отдела позвоночника;
- послеоперационном состоянии на шейном отделе позвоночника;
- коррекции смещения шейных позвонков.

Результат применения:

- Бандаж ограничивает вращательные, сгибательные и разгибательные движения шеи;
- Тепловое воздействие способствует улучшению кровообращения, ускорению восстановления и сокращению сроков выздоровления.

Изготовлен из высококачественного поролона, анатомическая форма, одна застежка-липучка, сверху защищен чехлом из хлопчатобумажной ткани.

Масса изделий составляет 50-100 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, белый, серый, голубой, кремовый.

Размеры подбираются измерением окружности шеи и высоты (от подбородка до яремной ямки, см):

взрослый (ССА-108 (8,00 см), ССА-109 (9,00 см), ССА-110 (10,00 см), ССА-111 (11,00 см),; детский (ССВ-103 (3,00 см), ССВ-104(4,00 см), ССВ-105 (5,00см), ССВ-106 (6,00 см), ССВ-107(7,00см).

Состав изделий: 13%-хлопок, 50%-полиэстер, 37%-эластик.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез жесткий поддерживающий для шейных позвонков СС-З (серийный номер 83)

Показания:

- травмы шейного отдела позвоночника;
- на этапе транспортной эвакуации;
- повышенная подвижность шейных позвонков;
- смещение шейных позвонков;
- остеопороз;
- остеомиелит;
- онкологические заболевания;
- остеохондроз;
- послеоперационный период на шейном отделе позвоночника.

Результат применения:

- фиксирует и стабилизирует шейный отдел позвоночника.
- Разгружает связочный аппарат и мышцы шейного отдела.
- Создает жесткую опору голове.

Изготовлен из материала по гипсовому позитиву человека, фиксируется двумя ремнями с застежкой-липучкой, отверстие в области щитовидного хряща позволяет контролировать состояние трахеостомы.

Масса изделий составляет 100-120 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый. **Размеры:** S,M,L,XL (подбираются так же, как и бандажи мягкие).


Состав изделия: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и винилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок.

Условия хранения: ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должно быть согласовано с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

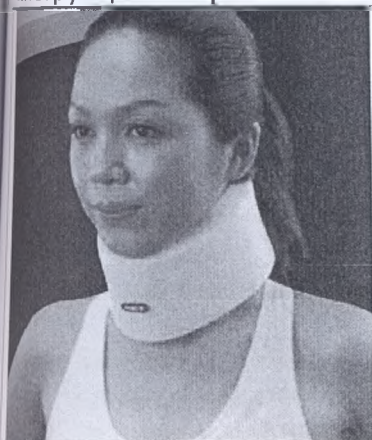

Бандаж мягкий поддерживающий для шейных позвонков (взрослый)
ССА-108 (8,00см),
ССА-109 (9,00см),
ССА-110 (10,00см),
ССА-111 (11,00см)

Код ОКП: 93 9670

размер	о р жность
8	30-45
9	30-45
10	30-45
11	30-45



Бандаж мягкий поддерживающий для шейных позвонков (детский)
CCV-103 (3,50см).
CCV-104 (4,00см).
CCV-105 (5,00см).

Код ОКП: 93 9670

размер	окр жность
3,5	до 23
4	до 25
5	до 25



Бандаж мягкий поддерживающий для шейных позвонков (детский)
CCV-106 (6,00см),
CCV-107 (7,00см).

Код ОКП: 93 9670

р змер	окружность
6	20-32
7	20-32



Бандаж жесткий поддерживающий для шейных позвонков
CC-3
S (25-33 см)
M (33-41 см)
L (41-46 см)
XL (46-48 см)

Код ОКП: 93 9670

Окр. шеи	25-33	33 41	41-46	46-48
Высота	5,7	5,7	5,7	5,7
а	8,3	8,3	8,3	8,3
оротника,	10,	10,8	10,	10,8
см	8	13,3	8	3,3
	13,3		13,3	
размер	S	M	L	XL

Корсет мягкий на брюшную стенку (узкий) 23 см (СР-23) (серийный номер 084)

Корсет мягкий на брюшную стенку (широкий) 31 см (СР-31) (серийный номер 085)

Показания:

- неосложненные невропатии миопатии поясницы;
- радикулиты и радикулозы;
- фиксирует переднюю и боковую брюшные стенки;
- реабилитация после операций на брюшную стенку;
- слабость брюшной стенки.

Результат применения:

- умеренная поддержка, защита от охлаждения мышц спины;

анная мобилизация после операций на органах брюшной полости и брюшной
енки;

профилактика образования грыж брюшной стенки.

Изготовлен:

обжены двойным клапаном для лучшего прилегания пояса к телу.

Масса изделий CP-23 составляет 140-220гр. в зависимости от размера.

Масса изделий CP-31 составляет 200-280гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, бежевый, серый, черный. **Размеры:** S,M,L,XL,XXL (подбираются
измерением окружности талии, см).

Состав изделий: 13%-хлопок, 50%-полиэстер, 37%-эластик.

Условия хранения: ортезы должны храниться при комнатной температуре, в сухих
помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортезы утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортезов дольше, чем
предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается
прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении
инструкции и правил эксплуатации.

Корсет полужесткий пояснично-крестцовый KLS-1(серийный номер 086)

Показания:

-радикулит, остеохондроз, спондилоартроз, спондилит, спондилолистез, протрузии
межпозвонковых дисков;

-реабилитация после травм и операций;

-функциональная терапия при болях в пояснице и нижней части.

Результат применения:

-гиперэкстензия, реклинация и разгрузка пояснично-крестцового отдела
позвоночника с компенсацией функции мышц спины;

-дозированная фиксация и разгрузка позвоночника;

-при физических нагрузках оказывает стабилизирующее действие на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника, стимулирующее действие на мышцы спины.

Изготовлен из прочного высококачественного материала, имеющего
воздухопроницаемые свойства. Корсет имеет две стяжки, снабженные застежкой-
липучкой, для усиления фиксации. Задняя стенка включает 4 ребра жесткости и
захватывает крестцовый отдел.

Масса изделий составляет 345-475 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный. **Размеры:** XS,S,M,L,XL,XXL (сумма окружностей талии и
бедер, деленная пополам, см).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-
поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих
помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем
предписано курсом лечения, должно быть согласовано с врачом. Не допускается
прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении
инструкции и правил эксплуатации.

Корсет полужесткий поясничный KL-2(серийный номер 087)

Показания:

-болевого синдром на фоне напряжения мышц и мышечного дисбаланса смещений
позвонков (спондилолистез I степени);

-функциональная терапия при люмбалгии и ишалгии;

профилактика травм и заболеваний при работе с тяжестями.

Результат применения:

-гиперэкстензия, реклинация и разгрузка поясничного отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины;

-дозированная фиксация и разгрузка позвоночника;

-при физических нагрузках оказывает стабилизирующее действие на поясничный отдел позвоночника, стимулирующее действие на мышцы спины.

Изготовлен из эластичного сетчатого материала. Корсет имеет две стяжки, снабженные застежкой-липучкой, для усиления фиксации. Расположение 4-х ребер жесткости снимает мышечное напряжение и в результате уменьшает боль. Ширина изделия 20 см.

Масса изделий составляет 210-265 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, белый, серый, синий.

Размеры: XS,S,M,L,XL,XXL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид, лента-липучка.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должно быть согласовано с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет полужесткий поясничный усиленный KL-3(серийный номер 088)

Показания:

- радикулит;
- корешковый синдром;
- локализованный остеохондроз;
- спондилоартрозы и спондилиты;
- межпозвоночные грыжи;
- смещение позвонков;
- функциональная терапия при болях в пояснице.

Результат применения:

-гиперэкстензия, реклинация и разгрузка поясничного отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины;

-дозированная фиксация и разгрузка позвоночника;

-при физических нагрузках оказывает стабилизирующее действие на поясничный отдел позвоночника, стимулирующее действие на мышцы спины.

-стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела.

Изготовлен из эластичного сетчатого материала. Корсет имеет две стяжки, снабженные застежкой-липучкой, для усиления фиксации. Расположение 6-ти ребер жесткости снимает мышечное напряжение и в результате уменьшает боль. Ширина изделия 25 см. Возможно ношение корсета стандартным способом или с реклинирующим эффектом.

Масса изделий составляет 330-440 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, белый, серый, синий.

Размеры: XS,S,M,L,XL,XXL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет грудно-поясничный (взрослый) KTL-2 (серийный номер 089)

Корсет грудно-поясничный (детский) KTL-4 (серийный номер 090)

Показания:

- формирование правильной осанки у взрослых и детей;
- искривления грудного отдела позвоночника;
- остеохондроз грудного отдела позвоночника, остеопороз;
- профилактика сутулости при нагрузке на позвоночник (при сидячей работе);
- реабилитация после травм и операций грудного отдела позвоночника;
- грыжи межпозвонковых дисков грудного отдела.

Результат применения:

- улучшает осанку, не ограничивая свободы движений;
- реклинация и разгрузка верхнее- и средне грудного отделов с укреплением мышечного корсета тонуса мышц.

Изготовлена спинка из неэластичного материала, что не препятствует мышечной активности. Корсет фиксируется на животе одной застежкой-липучкой. Имеется 2 моделируемых ребра жесткости, расположенных паравертебрально. Разворот плеч поддерживают две нерастяжимые лямки с застежками-липучками.

Масса изделий **KTL-2** составляет 300-440 гр. в зависимости от размера.

Масса изделий **KTL-4** составляет 200-250 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, белый, серый, синий.

Размеры KTL-2: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1, XXL.

Размеры KTL-4: S, M, L.

Состав изделий: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсеты должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсеты утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсетов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсетов без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет грудно-поясничный усиленный KTL-5 (серийный номер 091)

Показания:

- нарушения осанки (сутулость), сопровождающиеся болевым синдромом в поясничной области;
- искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I-II степени);
- профилактика переломов на фоне остеопороза;
- реабилитация после операций и травм позвоночника;
- множественные грыжи межпозвонковых дисков грудного отдела.

Результат применения:

- улучшает осанку, не ограничивая свободы движений;
- реклинация и разгрузка верхнее- и средне грудного отделов с укреплением мышечного корсета, тонуса мышц;
- снятие мышечного напряжения и, соответственно, устранение болевого синдрома.

Изготовлен: спинка из неэластичного материала, что не препятствует мышечной активности. Корсет фиксируется на животе одно застёжкой-липучкой. Имеются 2 моделируемых ребра жесткости, расположенных паравертебрально. Разворот плеч держивают двумя нерастяжимые лямки с застёжками-липучками. В конструкции предусмотрены ленты натяжения для снятия мышечного напряжения и, соответственно, устранение болевого синдрома.

Масса изделий составляет 390-540 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, белый, серый, синий.

Размеры **КТЛ-5**: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1, XXL.

Методика надевания:

Необходимо пропустить подмышками и перекрестить их на спине. Затем, расправить плечи пациента и зафиксировать достигнуто положение плечевого пояса, закрепив лямки застёжками «липучка» на поясе корсета.

Рекомендованный режим ношения для коррекции осанки:

начиная с 1-1,5 часов в первый день постепенно в течении двух недель увеличить время до 6 часов в день;

постоянное ношение в течении 6 часов каждый день 2 месяца;

постепенно в течении 2-х недель снизить до 1-1,5 часов в последний день использования;

по прошествии 3-х месяцев ОБЯЗАТЕЛЬНО проконсультироваться у лечащего врача.

Индивидуальный режим и сроки ношения определяет лечащий врач!

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсета должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет пояснично-крестцовый жесткий KS-2(серийный номер 092)

Показания:

- иммобилизация после хирургического вмешательства;
- грыжи межпозвонковых дисков поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника;
- переломы позвонков в поясничном отделе;
- спондилолистезы с угрозой травм корешков спинного мозга;
- нестабильность в поясничном отделе позвоночника по различным причинам.

Результат применения:

-гиперэкстензия, реклинация и разгрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины.

Изготовлен из легких и прочных материалов. Внутри жесткого корсета находится мягкая подкладка. Шесть фиксирующих ремней снабжены застёжками-липучками.

Масса изделий составляет 400-550 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, черный, бежевый, белый, синий. **Размеры:** S, M, L, XL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

Состав изделия: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и винилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет грудно-поясничный жесткий KS-1 (серийный номер 093)

Показания:

- иммобилизация после хирургического вмешательства;
- грыжи межпозвонковых дисков грудного и поясничного отделов позвоночника;
- переломы позвонков в грудно-поясничном отделе;
- спондилолистезы с угрозой травм корешков спинного мозга;
- нестабильность в грудно-поясничном отделе позвоночника по различным причинам.

Результат применения:

- гипэрэкстензия, реклинация и разгрузка грудно-поясничного отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины.

Изготовлен из легких и прочных материалов. Внутри жесткого корсета находится мягкая подкладка. Восемь фиксирующих ремней снабжены застежками-липучками.

Масса изделий составляет 500-650 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, черный, бежевый, белый, синий. **Размеры:** S, M, L, XL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

Состав изделия: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и винилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет жесткий (гипэрэкстензор) G-1 (серийный номер 094)

Показания:

- стабильные компрессионные переломы тел позвонков нижегрудном и поясничном отделах (Th10-L2) без неврологической симптоматики.

Результат применения:

- поддерживает гипэрэкстензионное положение в грудно-поясничном отделе позвоночника;
- способствует нормализации мышечного тонуса в зоне повреждения;
- уменьшает грудной кифоз и увеличивает поясничный лордоз, эффективно разгружая передние отделы тел позвонков;
- облегчает или устраняет болевой синдром;
- функционально-выгодное положение ускоряет восстановление костной ткани позвонка в зоне перелома.

Результат применения:

- способствует поддержанию необходимого положения позвонка в сагиттальной плоскости за счет работы собственных мышц пациента;

Особенность: трехточечная опорная система, пелоты крепятся в области поясницы, грудины и симфиза; модульная конструкция обеспечивает возможность точной подгонки; имеет небольшой вес.

Масса изделий составляет 1500-2000 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, черный, бежевый, белый, синий. **Размеры:** универсальный (позволяет использовать ортез у пациентов различного роста и телосложения, с окружностью талии до 150 см.).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет жесткий (гиперэкстензор рамочный) G-2 (серийный номер 095)

Показания:

- стабильные компрессионные переломы тел позвонков нижнегрудном и поясничном отделах (Th10-L2) без неврологической симптоматики.

Результат применения:

- поддерживает гиперэкстензионное положение в грудно-поясничном отделе позвоночника;
- способствует нормализации мышечного тонуса в зоне повреждения;
- уменьшает грудной кифоз и увеличивает поясничный лордоз, эффективно разгружая передние отделы тел позвонков;
- облегчает или устраняет болевой синдром;
- ограничивает боковое сгибание и ротационные движения туловища;
- функционально-выгодное положение ускоряет восстановление костной ткани позвонка в зоне перелома.

Особенность:

- рамочное исполнение обеспечивает надежную стабилизацию, как в сагиттальной, так и во фронтальной плоскости;
- 3-точечная система поддержки способствует восстановлению нормального изгиба позвоночника за счет работы собственных мышц;
- модульная конструкция корсета позволяет выполнить точную индивидуальную подгонку;
- подвижная тазовая перекладина может быть закреплена на необходимом уровне (удобно для полных пациентов);
- расположение стернального пелота, высота и ширина рамы легко регулируются;
- при контакте с поверхностью грудной клетки угол установки стернального пелота автоматически регулируется благодаря подвижному блоку;
- сменные подкладки из мягкого вспененного материала прикрепляются с помощью застежек-липучек;
- корсет имеет небольшой вес, легко моется.

Масса изделий составляет 2300-2800 гр. в зависимости от размера.

Цвет: серый, черный, бежевый, белый, синий. **Размеры:** S, M, L, XL, XXL (окружность бедер, см.).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет грудно-поясничный, полужесткий KTL-3

(серийный номер 096)

Показания:

- остеохондроз, спондилез, спондилолистез;
- радикулиты;
- грыжи межпозвонковых дисков нижнегрудного, поясничного и крестцового отдела позвоночника;
- период реабилитации после травм и операций нижнегрудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков.
- нестабильность в поясничном отделе позвоночника по различным причинам.

Результат применения:

- гипэрэкстензия, реклинация и разгрузка грудно-пояснично-крестцового отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины.

Изготовлен из легких и прочных эластичных материалов. Корсет имеет две дополнительные стяжки, снабженные застежкой-липучкой, для усиления фиксации. Расположение 4-ех ребер жесткости снимает мышечное напряжение и в результате уменьшает боль. Ширина изделия 35 см. Возможно ношение корсета стандартным способом или с реклинирующим эффектом.

Масса изделий составляет 210-265 гр. в зависимости от размера.

Цвет: белый, черный, серый, бежевый, синий. **Размеры:** S,M,L,XL (подбираются измерением окружности талии, см).

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет-корректор осанки PP-2 (серийный номер 097)

Показания:

- нарушения осанки (сутулость), сопровождающиеся болевым синдромом в грудном отделе позвоночника;
- искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I-II степени);
- профилактика переломов на фоне остеопороза;
- реабилитация после операций и травм грудного отдела позвоночника;
- множественные грыжи межпозвонковых дисков грудного отдела.

Результат применения:

- две наплечные лямки закрепляющиеся на задней части корректора в виде треугольника

- улучшает осанку, не ограничивая свободы движений;

- реклинация и разгрузка верхне- и среднегрудного отделов с укреплением мышечного корсета, тонуса мышц;

- снятие мышечного напряжения и, соответственно, устранение болевого синдрома

Изготовлен спинка из эластичного дышащего материала, что не препятствует мышечной активности. Корсет фиксируется на животе одной лямкой-липучкой. Имеются 2 ребра жесткости, расположенных по бокам от позвоночника. Разворот плеч поддерживают две растяжимые лямки-липучки.

Масса изделий составляет 300-350 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размер: S/M, L/XL (подбирается измерением окружности талии и роста, см.)

Состав изделия: 45%-полипропилен, 30%-нейлон, 5%-сополимер этилена и анилацетата, 15%-вспененный полиуретан, 5%-хлопок.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет-корректор осанки PP-3, PPC-2 (серийный номер 098, 099)

Показания:

- формирование правильной осанки у взрослых и детей;
- искривления грудного отдела позвоночника;
- остеохондроз грудного отдела позвоночника, остеопороз;
- профилактика сутулости при нагрузке на позвоночник (при сидячей работе);
- реабилитация после травм и операций грудного отдела позвоночника;
- грыжи межпозвонковых дисков грудного отдела.

Результат применения:

- улучшает осанку, не ограничивая свободы движений;
- реклинация и разгрузка верхнее- и средне грудного отделов с укреплением мышечного корсета тонуса мышц;
- надежная фиксация, которая позволяет формировать правильную красивую осанку
- возможность использования как самостоятельного метода профилактики нарушений осанки;
- удобство в применении (корректор незаметен под одеждой).

Изготовлена спинка из хлопчатобумажного материала, что не препятствует мышечной активности. Корсет фиксируется на животе одной застежкой-липучкой. Имеется 2 моделируемых ребра жесткости, расположенных параллельно позвоночнику. Разворот плеч поддерживают две нерастяжимые лямки с застежками -липучками.

Масса изделий PP-3 составляет 390-540 гр. в зависимости от размера.

Масса изделий PPC-2 составляет 200-250 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры PP-3: S,M,L,XL,XXL.

Размеры PPC-2: S,M,L (подбирается измерением окружности талии и роста, см.)

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет поясничный KL-4 (серийный номер 100)

Показания:

- остеохондроз, спондилез, спондилолизтез в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в том числе с болевым синдромом;
- радикулит, миозит, ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- восстановительный период после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;

профилактика повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника при интенсивных физических нагрузках

Результат применения:

полужесткую фиксацию нижнегрудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника;
разгрузку мышц спины;
противоболевой эффект.

Изготовлен из эластичного "дышащего" материала, не вызывающего раздражения кожи; эластичная двойная стяжка с застежкой-липучкой обеспечивает дополнительную фиксацию; требуемая жесткость обеспечивается 4 металлическими ребрами.

Масса изделий составляет 330-440 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры KL-4: S,M,L,XL,XXL. (подбирается измерением окружности талии, см.)

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет поясничный KLU-1 (серийный номер 101)

Показания:

- опущение органов брюшной полости;
- миозиты, люмбалгии;
- боли при дегенеративных заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника (остеохондроз, спондилезе и др.)
- реабилитация после травм и операций в области поясничного отдела позвоночника;
- болевой синдром при остеопорозе;
- грыжи межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.
- профилактическое применение при физических нагрузках и занятиях спортом

Результат применения:

- обеспечивает полужесткую фиксацию пояснично-крестцового отделов позвоночника;
- противоболевой эффект;
- разгружает мышцы и восстанавливает физиологическое положение позвоночника;
- облегчает и устраняют болевой синдром;
- поддерживает переднюю брюшную стенку.

Изготовлен из эластичного воздухо- и влагопроницаемого материала, не вызывающего раздражения кожи; имеет два типа размера, который регулируется дополнительной одной съемной манжетой на 1 застежке-липучке; снабжен четырьмя металлическими пластинами, принимающими форму тела.

Масса изделий составляет 220-270 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры KL-3: S/M, L/XL (подбирается измерением окружности талии, см.)

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет пояснично-крестцовый KLS-2 (серийный номер 102)

Показания:

- реабилитация после операций на крестцовом и поясничном отделах позвоночника;

- острые и хронические боли вследствие травм позвоночника;

- неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков;

- пояснично-крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии;

- боли в пояснице, вызванные избыточным весом и мышечной недостаточностью;

- грыжи межпозвонковых дисков;

- воспаление крестцово-подвздошного сочленения;

- дегенеративное смещение позвонков;

- ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника;

- после мануальной терапии и лечебной гимнастики;

Результаты применения:

- сильная фиксация пояснично-крестцового отдела позвоночника;

- 4 моделируемых, вынимаемых ребра жесткости позволяют добиться анатомически правильного расположения корсета и обеспечить максимальную степень поддержки;

- разгружает пояснично-крестцовый отдел позвоночника;

- улучшает сенсомоторный контроль, обеспечивает стабилизацию за счет активации собственных мышц;

- способствует уменьшению болевых ощущений.

Изготовлен: воздухопроницаемого влагоотводящего материала с высоким содержанием хлопка. 3 удобные застежки-липучки (одна основная и две дополнительные) для более сильной фиксации, четыре металлические шины.

Масса изделий составляет 220-270 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры: S, M, L, XL, XXL (подбирается измерением окружности талии, см.)

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет пояснично-крестцовый KLS-3 (серийный номер 103)

Показания:

- реабилитация после травм и реабилитаций в области пояснично-крестцовой области позвоночника;

- болевой синдром при остеопорозе;

- болевой синдром при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях пояснично-крестцового отделов позвоночника;

- боли в пояснице, вызванные избыточным весом и мышечной недостаточностью;

- грыжи межпозвонковых дисков;

- воспаление крестцово-подвздошного сочленения;

- дегенеративное смещение позвонков;

- ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Результаты применения:

- создает функционально выгодное положение;
- разгружает мышцы спины;
- уменьшает явления воспаления и стимулирует восстановительные процессы, тем самым облегчает и устраняет болевой синдром;
- замедляет прогрессирование заболевания.

Изготовлен: из прочного эластичного воздухо- и влаго-проницаемого гипоаллергенного материала. Прямая высокая модель с четырьмя функционально скрепленными пластинами, фиксируется спереди с помощью прочной одной застежки-липучки; на задней стенке имеются две перекрещивающиеся ленты усиления, которые позволяют регулировать степень фиксации; оснащен четырьмя металлическими пластинами.

Масса изделий составляет 220-270 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры: S, M, L, XL, XXL (подбирается измерением окружности талии, см.)

Состав изделия: 60%-полиэстер, 20%-нейлон, 12%-сталь, 3%-хлопок, 5%-поливинилхлорид.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Корсет грудной (торакальный) КТ-2 (серийный номер 104)**Показания:**

- реабилитационный период после операций на органах грудной клетки;
- травмы грудной клетки.

Результаты применения:

- полная фиксация грудной клетки;
- создает оптимальные условия для заживления послеоперационных рубцов;
- уменьшение боли в области раны.

Изготовлен: корсет выполнен из эластичного материала, который способствует стягиванию грудной клетки и скорейшему заживлению операционной раны. Одна застежка «липучка» располагается либо по передней поверхности грудной клетки либо сбоку. Корсет имеет специальную анатомическую форму, которая позволяет оптимально расположить бандаж на грудной клетке. На задней части корсета имеет два пластиковых ребра жесткости, которые расположены симметрично по бокам от позвоночника. Две лямки, перекинутаые через надплечья, способствуют лучшей фиксации бандажа.

Масса изделий составляет 550-700 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL (объем грудной клетки, см.)

Состав изделия: 30%-неопрен, 27%-хлопок, 23%-эластик, 20%-лайкра.

Условия хранения: корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Ортез пупочный (детский) OUC-11 и OUC-12 (серийный номер 105 и 106)

Показания:

консервативное лечение пупочных грыж у детей до 6-ти лет;

профилактика выпадения и ущемления грыжевого мешка

Изготовлен: из прочного и эластичного комбинированного материала и очень приятен на ощупь, выполнен из экологически чистых и гипоаллергенных материалов. Фиксируется на теле при помощи одной надежной застежки-липучки. Рекомендуется надевать лежа, после вправления грыжевого выпячивания.

Масса OUC-11 составляет 35 гр. в зависимости от размера.

Масса OUC-12 составляет 40 гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры универсальный.

Состав изделия: 13%-хлопок, 50%-полиэстер, 37%-эластик.

Условия хранения: ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации

Ортез паховый OGH-1 (серийный номер 107)

Показания:

послеоперационный период
вправляемые грыжи паховой и бедренной областей
грыжи образовавшиеся после операций на паховой области
профилактика ущемлений и рецидивов паховых грыж.

Результаты применения:

За счет конструкции пахового бандажа и его пелотов осуществляется механическая поддержка области образования паховых грыж и предупреждение образования ущемленных грыж, а также увеличение грыжевого мешка.

Изготовлен: из перфорированного материала, не вызывает раздражений. Оснащен четырьмя съемными пелотами, за счет чего можно либо увеличивать, либо уменьшать давление на область грыжевого выпячивания. Двухсторонний паховый бандаж одевается лежа, на нижнее белье, при полном вправлении грыжи. Затем в «кармашки» устанавливается съемный пелот, и фиксируется пояс с помощью одной застежки-липучки.

Масса изделия 100-150гр. в зависимости от размера.

Цвет: бежевый, черный, серый, белый, синий.

Размеры: S,M, L,XL,XXL (объем окружности между талией и бедрами, см.)

Состав изделия: 13%-хлопок, 50%-полиэстер, 37%-эластик.

Условия хранения: ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации: ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не установлен. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок: 6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.



CP-23

Корсет мягкий на
брюшную стенку
(узкий)
23 см.
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружност ь талии
S	До 85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135



CP-31

Корсет мягкий на
брюшную стенку
(широкий) 31 см.
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружност ь талии
S	До 85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135



KLS-1

Корсет полужесткий
пояснично-крестцовый
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружносте й талии и бедер, деленная пополам, см	
XS	До 70	
S	70-85	
M	85-97	
L	97-105	
XL	105-115	
XXL	Более 115	



Корсет полужесткий
поясничный
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670	
размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
XS	До 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	Более 115



Корсет полужесткий
поясничный усиленный
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670	
размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
XS	До 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	Более 115



Корсет грудно-
поясничный (взрослый)
S,S1,M,M1,L,L1,XL,XL1,
XXL,XXL1

Код ОКП: 93 9670	
размер	Рост, сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	150-160 60-75
S1	160-170 60-75
M	160-170 70-85
M1	170-180 70-85
L	170-180 80-95
L1	180-190 80-95
XL	180-190 90-110
XL1	190-200 90-110
XXL	200-210 110-130

КТЛ-2




TL-4

Корсет грудно-поясничный (детский)
S,M,L

Код ОКП: 93 9670

размер	Рост, сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	100-120 45-52
M	120-140 52-58
L	140-160 58-65

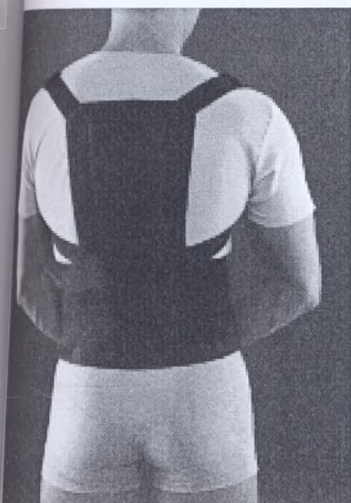


TL-5

Корсет грудно-поясничный усиленный
S,S1,M,M1,L,L1,XL,XL1,
XXL,XXL1.

Код ОКП: 93 9670

размер	Рост см	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	150-160	60-75
S1	160-170	60-75
M	160-170	70-85
M1	170-180	70-85
L	170-180	80-95
L1	180-190	80-95
XL	180-190	90-110
XL1	190-200	90-110
XXL	200-210	110-130

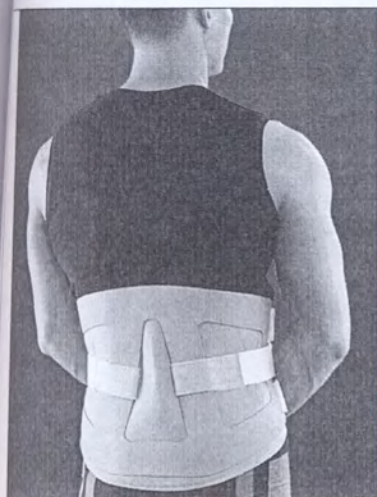


KS-2

Корсет жесткий
пояснично-крестцовый
S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670


размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	75-90
M	90-105
L	105-120
XL	120-135

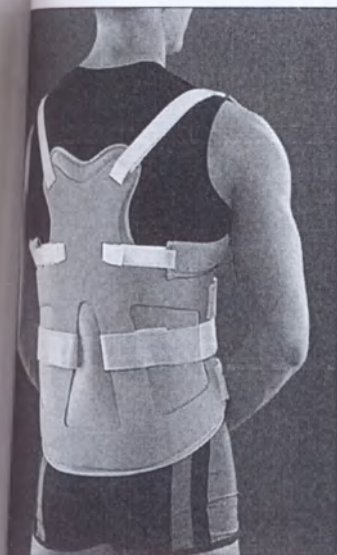

Корсет грудно-поясничный жесткий S, M, L, XL

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	75-90
M	90-105
L	105-120
XL	120-135

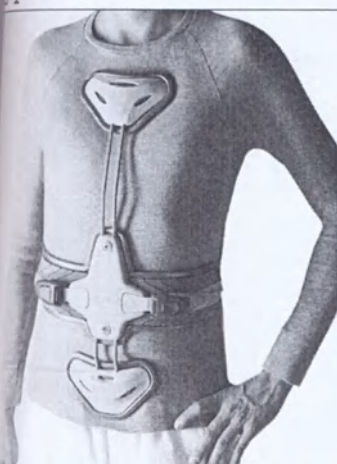

Корсет жесткий (гиперэкстензор) G-1

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность талии, см
универсальный	До 150 см



Корсет жесткий (гиперэкстензор рамочный) G-2

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность бедер, см
S	60-75
M	75-90
L	90-105
XL	105-115
XXL	115-125



Корсет грудно-поясничный, полужесткий S, M, L, XL, XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность талии
S	60-80
M	80-100
L	100-120
XL	120-140

КТЛ-3



Корсет-корректор осанки
S/M,L/XL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность талии
S/M	70-95
L/XL	95-120



Корсет-корректор осанки
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, ростсм	
XS	60-75 150-160	
S	60-75 160-170	
M	70-85 160-170	
L	70-85 170-180	
XL	85-95 170-180	
XXL	90-110 170-190	



Корсет-корректор осанки(детский)
S,M,L

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, рост см	
S	45-52 100-120	
M	52-58 120-140	
L	58-65 140-160	

Корсет поясничный
XS,S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и	
--------	---------------------------	--



4



U-1

Корсет поясничный
S/M,L/XL

	бедер, деленная пополам, см		
XS	До 70		
S	70-85		
M	85-97		
L	97-105		
XL	105-115		
XXL	Более 115		

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	
S/M	70-95	
L/XL	95-110	



KLS-2

Корсет пояснично-
крестцовый
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	
S		
M		
L		
XL		
XXL		


Корсет пояснично-
крестцовый
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность талии
S	64-72
M	72-80
L	80-90
XL	90-100
XXL	100-110



S-3

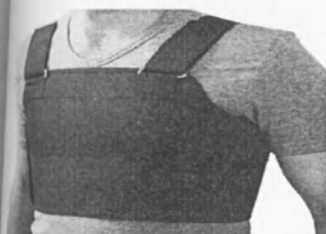

T-2



OUC-11



OUC-12

Корсет грудной
(торакальный)
S,M,L,XL

Ортез пупочный
(детский)
S,M,L,XL

Ортез пупочный
(детский)
S,M,L,XL

Код ОКП: 93 9670

размер	сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см	
XS	65-75	
S	75-85	
M	85-95	
L	95-105	
XL	105-115	
XXL	115-125	
XXXL	125-135	

Код ОКП: 93 9670

размер	универсальн ый	
--------	-------------------	--

Код ОКП: 93 9670

размер	универсальн ый	
--------	-------------------	--



GH-1

Орtez паховый
S,M,L,XL,XXL

Код ОКП: 93 9670

размер	Окружность талии
S	До 85
M	85-95
L	95-105
XL	105-115
XXL	Более 115

Уход и дезинфекция

Поверхность изделий с жесткой фиксацией протирать влажной губкой, растворами моющих средств по ГОСТ 25644 и сушить при температуре не выше 40 °С.

Сушить вблизи от нагревательных приборов и избегать попадания прямых солнечных лучей, т.к. изделия могут потерять форму.

Покрытия из вспененного полимерного материала протирать мягкой тканью, смоченной моющим средством, сушить при температуре 18-20 °С вдали от отопительных приборов.

Инструкция по стирке:

При первой стирке стирайте изделия отдельно от другого белья.

Изделия следует стирать вручную (40°C), особенно если Вы применяете мази для лечения ног.

После стирки тщательно и многократно прополощите изделия.

Используйте моющие средства без отбеливателя (шампунь, детское мыло).

При стирке не следует использовать средства, придающие мягкость белью.

После стирки высушите Ваши изделия на воздухе или в стиральной машине в режиме сушки.

Не сушите влажные изделия на полотенце или под прямыми солнечными лучами.

Нельзя подвергать изделия химической чистке.

1. Санитарная обработка бандажей на шейный отдел позвоночника:

Стирка бандажа по мере загрязнения, не реже 1 раз в месяц, количество стирок до 150 раз, дополнительный чехол для бандажа стирается ежедневно.

2. Санитарная обработка компрессионного трикотажа:

Ежедневная стирка только вручную. Выдерживает до 200 стирок.

3. Санитарная обработка фиксаторов на верхние и нижние конечности:

Стирка по мере загрязнения, 3 раза в месяц, выдерживает до 250 стирок.

4. Санитарная обработка фиксаторов на верхние и нижние конечности с силиконовыми вставками:

Стирка по мере загрязнения, 3 раза в месяц, выдерживает до 200 стирок.

5. Санитарная обработка фиксаторов эластичных на верхние и нижние конечности:

Стирка по мере загрязнения, не реже 3 раза в месяц, выдерживает до 150 стирок.

6. Санитарная обработка эластичных поясов:

стирка не реже 1 раза в неделю, максимальное количество стирок 100 .

Санитарная обработка корсетов на грудной, поясничный и крестцовый отдел позвоночника:

стирка по мере загрязнения, не реже 1 раза в месяц, максимальное количество стирок 10 раз.

Транспортировка упакованных изделий должна осуществляться в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, в трюмах судов, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с требованиями правил, действующих на данном виде транспорта, при следующих условиях окружающей среды:

температура окружающего воздуха от -10 до +40°C;

относительная влажность – не более 70%;

условия транспортировки изделия – по группе 5 по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться в чистых, сухих, закрытых помещениях при условиях:

температура окружающего воздуха от -10 до +40°C;

относительная влажность – не более 70%;

защитить от непрямого и прямого воздействия солнечного и искусственного света.

полномоченный представитель производителя в РФ (наименование, адрес, телефон, почта)

Общество с ограниченной ответственностью "Атлетт" (ООО "Атлетт")

Адрес: 420044, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 73, кв.

телефон: +7-843-515-12-95

Почта: atlett@bk.ru

_____/ /
(Signature)

The press

Clamps of the lower limb

Orthosis on the knee joint, elastic OK-11 (serial number 001)

Orthosis on the knee joint elastic with Velcro OK-12 (serial number 002)

Orthosis on the knee of high elasticity OK-13 (serial number 003)

Indications:

- prophylaxis of knee joint injuries in sports;
- bruises, knee joint injuries;
- extension of muscles and ligaments;
- pain syndrome in chronic joint diseases;
- Prevention of hypothermia of joints when working in difficult climatic conditions.

Result of application:

- heats the joint and adjacent tissues;
- has a micro massage effect and compression;
- provides the fixation of joints;

Reduces pain syndrome;

- unloads muscles and ligaments of the knee joint.

Features: made of elastic material, creating a compression above the 2nd class, ensuring a tight fitting of the product and the necessary impact on the joint. The web is made of special viscous with sections of different density according to the anatomical structure of the joint. Products OK-12 has one velcro-strap, which provides a more durable fixation. The fabric of the OK-13 product has a multidirectional netting, which ensures a perfect fit and the correct distribution of pressure. The products are breathable moisture separators that promote the intense evaporation of moisture from the surface of the skin, maintains heat and improves blood circulation in the joint.

The weight of the products is 40-55 gr. depending on the size.

Color: gray, beige, white, black, blue. Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (measurement of the midpoint of the knee in the standing position, cm).

The composition of products OK-11, OK-12, OK-13: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the knee joint elastic, reinforced with stiffeners OKE-11 (serial number 004)

Orthosis on the knee joint is elastic, reinforced with stiffeners with Velcro OCE-12 (serial number 005)

Orthosis on the knee of high elasticity, reinforced with stiffeners OKE-13 (serial number 006)

Indications:

- prophylaxis of knee joint injuries in sports;

- bruises, knee joint injuries;

- extension of muscles and ligaments;

- pain syndrome in chronic joint diseases;

prevention of hypothermia of joints when working in difficult climatic conditions.

Result of application:

- heats the joint and adjacent tissues;

- has a micro massage effect and compression;

- provides the fixation of joints;

Reduces pain syndrome;

- unloads muscles and ligaments of the knee joint;

- helical stiffeners reduce impact loads on the knee joint.

Features: Made of elastic material, creating compression above the 2nd class, ensuring a tight fit of the product and the necessary impact on the joint. The canvas has an air permeable moisture-removing effect, is made by special viscous with sections of different density according to the anatomical structure of the joint. The product OKE-12 has one velcro-velcro, which provides a more durable fixation. The fabric of the product OKE-13 has a multidirectional netting, providing an excellent fit and the correct distribution of pressure. There are lateral stiffeners.

The weight of the products is 70-90 gr. depending on the size.

Color: gray, beige, white, black, blue. Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (measurement of the midpoint of the knee in the standing position, cm).

The composition of the products: OKE-11, OKE-12, OKE-13: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the knee joint elastic with stiffeners and silicone pad OKS-11 (serial number 007)

Orthosis on the knee of a high elasticity with a silicone pad OKS-12 (serial number 008)

Orthosis on the knee joint of high elasticity with stiffeners and silicone pad OKS-13 (serial number 009)

Orthosis on the knee joint is tight-elastic with stiffeners and silicone pad OKS-14 (serial number 010)

Indications:

- bruises and sprains of ligaments of the knee joint;
- dislocation of the patella;
- inflammatory diseases of the knee and patella;
- rehabilitation after injuries of the knee and patella;
- prophylaxis of knee joint injuries during physical activity.

Result of application:

- heats the joint and adjacent tissues;
- has a micro massage effect and compression;
- provides the fixation of joints;

Reduces pain syndrome;

- unloads muscles and ligaments of the knee joint;
- helical stiffeners reduce impact loads on the knee joint;
- silicone pad fixes the knee cap.

Features: Made of elastic material, creating a compression above the 2nd class, ensuring a tight fitting of the product and necessary impact on the joint. The canvas has an air permeable moisture-removing effect, is made by special viscous with sections of different density according to the anatomical structure of the joint. The fabric OKS-12, OKS-13 has a multidirectional netting, which ensures perfect fit and proper distribution of pressure. OKS-14 exerts a rigid fixation and compression action on the knee joint, increasing its resistance to stress. Products OKS-11, OKS-13, OKS-14 are equipped with lateral stiffeners. The silicone pad fixes the patella.

The weight of the products is 85-105 gr. depending on the size.

Color: beige, gray, black, white, blue. Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (measurement of the midpoint of the knee in the standing position, cm).


The composition of the products: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% - lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

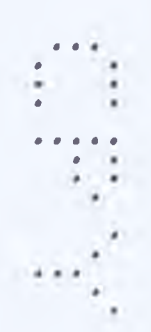

Knee-type neoprene bracelet with silicone insert OKN-21 (serial number 011)

Neoprene knee brace with silicone insert and stiffeners OKN-22 (serial number 012)

Indications:

- inflammatory and degenerative diseases;
- prophylaxis of knee and patella injuries;
- bruises, sprains;
- boli in the knee joint;
- period of rehabilitation after knee joint injuries;
- arthritis-arthritis, bursitis, synovitis.

Result of application:

- fixation of the knee and patella, stabilization of the knee in the frontal plane, moderate compression;
- microphone action;
- heat-saving effect improves blood circulation;
- The elastic roller-ring stabilizes the patella;
- helical stiffeners in OKN-21 model reduce impact loads when walking.

Features: Made of porous aeroprene, possessing a heat-saving property, without interfering with skin breathing. The hole on the front surface of the bandage and the elastic roller-ring reliably limit the mobility of the patella. Spiral stiffeners in the product OKN-22 make it possible to use it for damages of the cruciate ligament of the knee joint.

The weight of products is 130-150 gr. depending on the size.

Color: beige, black, white, blue, gray. Size: XS, S, M, L, XL, XXL (measurement of the circumference of the middle of the knee in standing position, cm).

The composition of the products: 30% - neoprene, 27% - cotton, 23% - elastic, 20% - lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household rubbish

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for patella fixing OP-21 (serial number 013)

Orthosis for patella universal OP-22 (serial number 014)

Indications:

- osteochondropathy tuberosity of the tibia (Osgut-Schlatter disease);
- a habitual (repetitive) dislocation of the kneecap (patella);
- prophylaxis of patella dislocation with increased loads on the knee joint;
- Professional and sports support loads on the knee joint.

Result of application:

- Strengthens the support of the knee by fixing the tendons of the quadriceps muscle of the thigh;
- OP-21, additional tab provides stronger fixation of the patella;
- OP-22, the non-slip base maintains the correct compression in the position of the joint movement.

The weight of products is 35-40 gr. depending on the size.

Features: the product can be worn directly on the body. It consists of an elastic cuff, a silicone cushion on the region of tuberosity of the tibia and one tightening with a velcro closure.

Color: black, blue, beige, white, gray. Size: universal.

The composition of the products: 60% - polyester, 20% nylon, 12% - steel, 3% -cotton, 5% -polyvenyl chloride, one tape-Velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the knee joint with side plates OK-21 (serial number 015)

Orthosis on the knee joint with side springs OK-22 (serial number 016)

Indications:

- Bole syndrome with injuries and joint diseases;
- instability of the knee joint;
- traumas of the patella;
- damage to the meniscus;
- prophylaxis of diseases and injuries of the knee joint.

Result of application:

- The side plates (removable polycentric hinges) ensure normal movement of the knee joint;

-the motorization immobilizes (creates rest) the knee joint in the period of inflammatory disease, with acute trauma or after surgical treatment;

-The knee joint is fixed and unloaded;

-Compression and massage effects are provided;

A heat-saving effect provides increased blood circulation of muscles and improved absorption of drugs;

-orthosis helps reduce edema and improve blood supply to soft tissues adjacent to the joint.

The weight of the products is 330-450 gr. depending on the size.

Features: Made of hypoallergenic neoprene, which also has a pronounced heat-saving effect, which improves blood circulation, facilitates the rapid absorption of external medications. Pelot in the patella region fixes the joint. OK-21 has side plates provide lateral stabilization of the knee joint. Spiral stiffeners on the sides of the product OK-22 provide additional support and soft fixation of the knee joint and tendons. The degree of fixation is regulated by the tension of the two straps.

Color: black, gray, white, beige, blue. Size: S, M, L, XL, XXL (measurement of the midpoint of the knee in the standing position, cm).

The composition of the products: 60% - polyester, 20% nylon, 12% - steel, 3% -cotton, 5% polyvinyl chloride, tape-Velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the knee joint with side plates split OKP-21 (serial number 017)

Orthosis on the knee joint with side springs detachable OKP-22 (serial number 018)

Indications:

- Conservative treatment of arthrosis of the knee joint;

- instability of the knee joint;

-Stabilization after removal of plaster casts;

- rehabilitation after surgery;

-prophylaxis of joint injuries during exercises related to the load on the knee joint;

it is convenient to put on aorta with a significant difference in the circumference of the leg above and below the knee, with excess weight or back pain, and also with regular physiotherapy procedures.

Result of application:

- The side plates (removable polycentric hinges) ensure normal movement of the knee joint;

-the motorization immobilizes (creates rest) the knee joint in the period of inflammatory disease, with acute trauma or after surgical treatment;

- The knee joint is fixed and unloaded;

- Compression and massage effects are provided;

- A heat-saving effect provides increased blood circulation of muscles and improved absorption of drugs;

-orthosis helps reduce edema and improve blood supply to soft tissues adjacent to the joint.

Features: made of hypoallergenic neoprene, which also has a pronounced heat-saving effect, which improves blood circulation, promotes rapid absorption of external medications.

Pelot in the patella region fixes the joint. OKP-21 has side plates that provide lateral stabilization of the knee joint. Spiral stiffeners along the sides of the OKP-22 product provide additional support and soft fixation of the knee and tendons. The products are equipped with two velcro straps.

The detachable design facilitates the donning of the orthosis to the knee joint, including with strong edema and over bandages.

The weight of the products is 330-450 gr. depending on the size.

Color: black, gray, white, beige, blue. Dimensions OKP-21: XS, S, M, L, XL, XXL; OKP-22: S / M, L / XL (measurement of the circumference of the middle of the knee joint in the standing position, cm).

The composition of the products: 60% - polyester, 20% nylon, 12% - steel, 3% -cotton, 5% polyvinyl chloride, tape-Velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the knee joint with a flexion angle regulator, shortened OR-31 (serial number 019)

Orthosis on the knee joint with a flexor angle regulator, universal OR-32 (serial number 020)

Orthosis on the knee joint with a flexor angle regulator, elongated OR-33 (serial number 021)

Indications:

-chronic instability of the knee;

- injuries and ruptures of the lateral and cruciate ligaments of the knee joint;

-trauma of menisci;

- step-by-step adjustable expansion of the volume of movements in the knee joint for rehabilitation after injuries and restorative surgical operations;

-rehabilitation measures after knee arthroplasty.

Result of application:

-fixing the knee joint;

-Stabilization and the possibility of metered movements of the knee joint;

-with the help of a protractor, the parameters of the volume of movements are specified in the development of contractures of the knee joint of a mixed genesis.

Comprises:

- four cuffs made of synthetic material with a cloth coating on the shin and thigh;

- two metal tires with a hinge that regulates the volume of movements in 10-degree increments; Immobilizes the knee joint at an angle of 10, 20, 30 degrees. Sets the amount of motion in the range from 0 to 120 degrees.

four belts with Velcro fasteners

The retractable tire allows to place the orthosis on the lower limb: on the inner surface of the thigh - under the inguinal fold area, outside - to the region of the hip joint; The length of the tire is adjustable in the range of 52-72 cm in increments of 2.5 cm.

OR-31- The grip lever is reduced,

OR-33 - increased grip lever.

The weight of products is 1500-2000 gr. depending on the size.

Color: black, gray, blue, white, beige. Size: universal.

The composition of the products: 60% - polyester, 20% nylon, 12% - steel, 3% -cotton, 5% polyvinyl chloride, tape-Velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis stabilizing on the knee joint OKR-31 (serial number 022)

Orthosis stabilizing the knee joint elongated OKR-32 (serial number 023)

Indications:

-stability of the knee joint of a pronounced degree;

-infix deformations of the knee joint (valgus or Varus);

- patella injury;

- damage to the meniscus;



- State after operation on the knee joint and postoperative pain;
- rehabilitation after injuries and restorative operations on the meniscus;
- immobilization of the knee during transportation.

Result of application:

- the basis of the action of the orthosis is the principle of stabilization, which makes it possible to exclude, substantially reduce or correct the axial load on the joint.

Comprises:

- three parts made of synthetic material with a soft, pleasant to the touch fabric coating;
- the five metal tires of the aluminum alloy;
- Equipped with a system of four or six puffs (depending on the size), equipped with velcro fasteners, respectively.

due to the elongation of the web and the plates, provides greater girth and a more complete fixation of the joint, which allows you to leave the joint in complete immobility.

The weight of the products is 800-1100 gr. depending on the size.

Color: black, white, gray, beige, blue. Size: S, M, L, XL, XXL (measuring the circumference of the thigh, cm).

The composition of the products: 60% - polyester, 20% nylon, 12% - steel, 3% -cotton, 5% polyvinyl chloride, tape-Velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Specifications (admissions $\pm 10\%$)

name	Overall dimensions, cm	Weight, g	Color
OK-11, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;	circle of the middle of a knee joint changes from 30 to 50 with walk 5, height 23	40-55 with walk 0,83 (depending on the Size)	Grey, beige, white, black, dark blue
OK-12, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;			
OK-13, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;			
OKE-11, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;		70-90 with walk 3,33 (depending on the Size)	
OKE-12, Size: XS, S, M, L, XL, XXL			
OKE-13, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;			

OKS-11, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;	middle circle knee joint changes from 30 to 50 with walk 5, height 26	85-105 with walk 3,33 (depending on the Size)	
OKS-12, Size: XS, S, M, L, XL, XXL			
OKS-13, Size: XS, S, M, L, XL, XXL			
OKS-14, Size: XS, S, M, L, XL, XXL			
OKN-21, Size: XS, S, M, L, XL, XXL	circle of the middle of a patellar joint changes from 30 to 50 with walk 5, height 26	130-150 with walk 3,33 (depending on the Size)	Beige, black, white, dark blue, grey
OKN-22, Size: XS, S, M, L, XL, XXL			
OP-21	Height 6, length 33	35	Black, dark blue, beige, white, grey 1 velcro fastener
OP-22;	Height 4,5, length 36	40	
OK-21, Size: S, M, L, XL, XXL;	circle of the middle of a patellar joint changes from 30 to 55 with walk 5, height 31	330-450 with walk 20 (depending on Size)	Black, grey, white, beige, dark blue 2 velcro fastener
OK-22, Size: S, M, L, XL, XXL;			
OKP-21, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;	circle of the middle of a knee joint changes from 30 to 55 with walk 5, height 32,5	330-450 with walk 20 (depending on Size)	Black, grey, white, beige, dark blue
OKP-22, Size: S, M, L, XL			
OR-31	Height 62, length 80	1500-2000	Black, grey, dark blue, white, beige
OR-32;			
OR-33			
OKR-31, Size: S, M, L, XL, XXL;	circle of the middle of a knee joint changes from 43 to 62 with walk 6, the length changes from 42 to 70 with walk 8	800-1100 with walk 60 (depending on Size)	Black, white, grey, beige, dark blue
OKR-32, Size: S, M, L, XL, XXL			
OPD;	Height 13, length 22	30-55	White, beige, grey, black
FA-11, Size: S, M, L, XL, XXL	Circle of an anticnemion above anklebone bones: 15-20, 20-25, 25-30, более30	25-35	White, black, beige, grey, dark blue
OA-11, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;	Circle of an anticnemion above anklebone bones: to 15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, More than 35 Height 23,5	30-55 with walk 4,16	Grey, beige, white, dark blue, black
OA-12, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;			
OA-13, Size: XS, S, M, L, XL, XXL;			
OA-13, Size: S, M, L, XL, XXL			
OAR-11, Size: S, M, L, XL, XXL	Circle of an anticnemion above anklebone bones: 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, more than 35 Height 23,5	40-60 with walk 4	White, black, beige, grey, dark blue
OAR-12, Size: S, M, L, XL, XXL;			
OAR-13, Size: S,			

M, L, XL, XXL;					
OAS-11, Size: S, M, L, XL, XXL;	Circle of an anticnemion above anklebone bones: 15-20, 20-25, 25-29, 29-34, more than 34 Height 23,5			65-90 with walk 5	Grey, beige
OAS-12, Size: S, M, L, XL, XXL;					
OAS-13, Size: S, M, L, XL, XXL;					
OA-21, Size: S, M, L, XL	Circle of an anticnemion above bones lodyzhki:17-20, 20-23, 23-26, 26-28			200-250 with walk 12,5	Black, white, grey, beige, dark blue
OA-22, Size: S, M, L, XL				250-300 with walk 12,5	
OAP-311	Height 45, length 45			350	White, dark blue, black, beige, grey
OAS-312, Size: S, M, L, XL;	Size	Size of man's footwear	Size of female footwear	150-200 with walk 10	White, beige, black, grey, dark blue
	S	35-38	To 37		
	M	39-43	37-39		
	L	43-45	39-42		
	XL	45-47	43-45		
	Height 23,5				
OA-313, Size: S, M, L, XL	Height 30			3500-4000 with walk 125	Black, white, beige, dark blue, grey
	Size	Size of footwear (European)			
	S	To 37			
	M	37-41			
	L	41-44			
	XL	More than 44			
OA-314, Size: S, M, L	Height 35				
	Size	Size of footwear (European)			
	S	To 37			
	M	37-41			
	L	41-44			
	XL	More than 44			
OT-11 (Right/left), Size: S, M, L, XL, XXL;	Grasp of hips 80-130 with walk 10, a dyne 78			2000-2500 with walk 100	White, beige, black, dark blue
OT-21 (Right/left), Size: XS, S, M, L, XL;	Size (A grasp on a pelvic ring (on 5 sm below a belly-button), sm)			550-700 with walk 30	Black, beige, white

	XS 70-80 S 80-90 M 90-100 L 100-110 XL 110-120 Height 17		
0-21, Size: XS, S, M, L	Size Age of the child, month XS 3-6 S 6-12 M 12-24 L 20-30 Height 9	100-150 with walk 12,5	White, black, beige
OT-31, Size: S, M, L;	Size Distance between subnodal poles in position of abduction in hip joints, sm S 16-20 M 21-30 L 31-40 Length 36	450-500 with walk 10	White, black, grey, beige

The thumb lock of the OPD foot (serial number 24)

Description:

- the retainer consists of a plastic frame with polyurethane foam overlays and 2 velcro fasteners, allowing you to pull your thumb inside;
- Night bandage bandage on the thumb, made of durable plastic;
- the plastic frame keeps the foot and thumb in the correct position during the night rest;
- Soft inner lining reduces pain and makes treatment comfortable;
- the tension of the bandage is gradually strengthened until complete cure (correction of the deformation of the finger);

The weight of the products is 30-55 gr. depending on the size.

Purpose:

- conservative treatment of valgus deformity of the big toe;
- fixation in the correct position after surgical treatment.

Benefits:

- A durable plastic frame holds the thumb in the correct position during sleep.

Recommendations for use:

Only for night use. When walking, do not apply! Do not use with open and bleeding wounds.

Size: universal.

Color: white, beige, gray, black.

Ingredients: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene-butylene acetate copolymer, 15% -fused polyurethane, 5% -cotton, velcro tape.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

The ankle-fixing ankle in the form of an 8-shaped bandage FA-11 (serial number 025)

Indications:

- partial damage to the ligaments and articular capsule of the ankle;
- prophylaxis of ankle joint injuries while playing sports.

Result of application:

- limited fixation of the Achilles tendon, ankle and foot;
- Easy compression;

It is made of medical elastic in the form of an 8-shaped dressing. Compression is achieved due to the elastic band and the possibility of adjusting the pulling by means of a velcro fastener over the ankles.

The weight of the products is 25-35 g. depending on the size.

Color: white, black, beige, gray, blue. Dimensions: S, M, L, XL (measurement of shin circumference above ankle bones, cm).

Ingredients: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for ankle joint elastic OA-11 (serial number 026)

Orthosis on the ankle elastic, with Velcro OA-12 (serial number 027)

Orthosis on ankle joint of high elasticity OA-13 (serial number 028)

Indications:

- trauma, bruises, sprains of ankle joints;

- prophylaxis of injuries and exacerbations of inflammatory diseases of the ankle joint under physical exertion.

Result of application:

- microphone action;

- even light compression;

- provides the fixation of the joint;

- Disease of pain syndrome.

It is made of an elastic material, which creates compression above the 2nd class, ensuring tight fitting of the product and the necessary impact on the joint. The web is made of special viscous with sections of different density according to the anatomical structure of the joint. The OA-12 has 1 velcro strap, which provides a more durable fixation. The fabric of the product OA-13 has a multidirectional netting, which provides an excellent fit and the correct distribution of pressure. Breathable, moisture draining promotes intensive evaporation of moisture from the surface of the skin, preserves heat and improves blood circulation in the joint.

The weight of the products is 30-55 gr. depending on the size.

Color: gray, beige, white, blue, black. Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (measurement of shin circumference above ankle bones, cm)

Ingredients: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for ankle joint elastic reinforced OAR-11 (serial number 029)

Orthosis on ankle joint tight-elastic with stiffeners OAR-12 (serial number 030)

Orthosis on the ankle joint elastic reinforced, with Velcro OAR-13 (serial number 031)

Indications:

- bruises and sprains of ankle joints;

- prophylaxis of ankle joint injuries and exacerbations of inflammatory diseases;

- prophylaxis of exacerbations of chronic course of inflammatory diseases of the ankle;

- prophylaxis of injuries in sports and physical activities.

Result of application:

- Moderate fixation of the ankle;

- uniform compression;

- The stiffeners reduce impact loads on the joint.

It is made of a dense elastic material, which creates compression above the 2nd class, ensuring tight fitting of the product and the necessary impact on the joint. The canvas has an air permeable moisture-removing effect, is made by special viscous with sections of different density according to the anatomical structure of the joint. Products OAR-13 has 1 velcro-sticky tape that provides a more durable fixation. The fabric of the OAR-12 product has a multidirectional netting, which ensures perfect fit and proper distribution of pressure. There are lateral stiffeners.

Spiral spring stiffeners reduce impact loads on the joint.

The mass of products is 40-60gr. depending on the size.

Color: white, black, beige, gray, blue. Size: S, M, L, XL, XXL (measurement of shin circumference above the ankle bones, cm).

Ingredients: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the ankle joint elastic with silicone inserts OAS-11 (serial number032)

Orthosis on the ankle joint elastic with silicone inserts and Velcro OAS-12 (serial number 033)

Orthosis on the ankle joint of high elasticity with silicone inserts OAS-13 (serial number 034)

Indications:

- extension of muscles and ligaments of the joint;

- rehabilitation after dislocations and subluxations of the ankle;

- prophylaxis of exacerbations and conservative treatment of arthrosis, arthritis, bursitis, synovitis;

- prophylaxis of injuries with ankle load;

- reduction of swelling after injuries and surgeries.

Result of application:

- Fixation of the ankle joint, silicone inserts reliably protect the ankles, reduce edema and stimulate proprioceptive sensitivity (deep sensitivity).

Made of dense elastic material. Silicone pads in the area of the bony protrusions fix the ankle joint. One Velcro strap on products OAS-12 provides a more dense and reliable fixation.

The fabric of the OAS-13 is made of high-elastic material, which has a multi-directional weave, which ensures perfect fit and proper distribution of pressure.

The weight of the products is 65-90 gr. depending on the size.

Color: gray, beige. Dimensions: S, M, L, XL, XXL (measurement of shin circumference above the ankle bones, cm).

Ingredients: 67% - nylon, 23% - elastic, 10% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on the ankle joint with lacing, rigid fixation OA-21 (serial number 035)

Orthosis on the ankle joint with lacing, soft fixation OA-22 (serial number 036)

Indications:

- damage to the ligaments of the ankle;
- Ankle injury;
- chronic ankle instability of pronounced degree;
- the stifling paralysis of the foot;
- rehabilitation after injuries and operations on the ankle;
- if excessive mobility (permanent dislocations) and with "hanging" the foot;
- prophylaxis of damage to the Achilles tendon, ankle and foot in sports, heavy loads.

Result of application:

- Fixation of the ankle and lower third of the shin;
- OA-21 provide a strong, tight fixation of the ankle;
- OA-22, due to softer and pleasant material provides a soft, at the same time, tight fixation of the joint.

Made of dense breathable material. Lateral rigid metal tires reliably fix the joint. Lacing facilitates individual adjustment of the size of the orthosis. Suitable for wearing in casual shoes. By appointment, the orthosis can be used instead of a cast bandage. Universal, it is possible to apply both on the right and on the left leg.

Color: black, white, gray, beige, blue. Dimensions: S, M, L, XL (measurement of shin circumference above ankle bones, cm).

The composition of the product OA-21: 60% - polyester, 20% nylon, 12% - steel, 5% cotton, 5% polyvinyl chloride, tape, velcro.

The composition of the product OA-22: 13% cotton, 50% polyester, 37% elastic.

Weight of OA-21 is 200-250 gr. depending on the size.

Weight OA-22 is 250-300g. Depending on the size.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for ankle joint (pneumatic tire) OAP-311 (serial number 037)

Indications:

- rehabilitation after dislocations, subluxations of the ankle joint;
- Bole syndrome and swelling after operations and injuries of bones and soft tissues of the ankle joint.

Result of application:

- rigid fixation of the ankle and lower third of the shin;
- immobilizes and cools the ankle joint during the period of inflammatory disease, with acute trauma or after surgical treatment.

It is made of two plastic tires of anatomical shape and two gel pillows for additional fixation and cooling of the soft tissues of the ankle joint. Plastic anatomical tires exactly repeat the contour of the leg and are attached to the shins and using two wide adjustable straps with a velcro closure. One of the two straps with Velcro fastening located on the sole allows you to adjust the orthosis according to the individual dimensions of the patient's leg. The gel pillows have the ability to keep up to two hours of low temperature (after cooling in the freezer for 15-20 minutes).

The weight of products is 350 gr.

Color: white, blue, black, beige, gray. Dimensions: universal.

The composition of the product: 45% - polypropylene, 30% - nylon, 5% - copolymer of ethylene and vinylacetate, 5% - foamed polyurethane, 5% - cotton, velcro tape.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for the ankle (stop holder) OAS-312 (serial number 038)

Indications:

- the hip stop syndrome after the suffered neuritis and damage of the peroneal nerve, in trauma, after strokes, spinal cord injuries, cerebral palsy, neuroinfections and spinal cord tumors;

Result of application:

- fixation of the foot, ankle and upper third of the leg in a functionally advantageous position;
- The art is designed for wearing in shoes.

Made of plastic. The plastic frame (sleeve) covers the shin in the gastrocnemius area and passes into a plastic half-cup. The plastic half-stem has the support of the inner longitudinal arch and high sides to stabilize the natural position of the foot. Two belts with velcro fastening: one with a soft gasket is fixed on the shank of the shank, the second strap can be attached both above the ankles, and on the rise of the foot. Designed for people weighing not more than 110 kg.

The weight of the products is 150-200. depending on the size.

Color: white, beige, black, gray, blue. Dimensions: S, M, L, XL right / left (matched to the size of the shoe).

The composition of the product: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene / vinyl acetate copolymer, 5% polyurethane foam, 5% cotton, 2 adhesive tape.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis on ankle joint adjustable extended OA-313 serial number 039)

Orthosis on the ankle joint is not adjustable shortened OA-314 serial number 040)

Indications:

- Early functional therapy for injuries of ankle ligaments, ankle injuries, intraarticular fractures and reconstructive surgeries;
- damage to the Achilles tendon;
- paralysis and paresis of the foot;
- Postoperative and conservative therapy of crural and foot fractures.

Results of application:



- dosage load on the joint in the postoperative period;
- provides the unloading of the foot;
- Allows you to fix the position of the rear or plantar flexion.

Made of two metal tires with volume controllers (the ability to set the angle of flexion-extension or the necessary range of movements in the joint in 10-degree increments). Three cuffs on the shins and two cuffs on the foot with Velcro fasteners for adjusting the degree of abutment of the orthosis to the body. Equipped with a sole with a roll, which provides the patient almost normal gait. There is a detachable socks on the velcro fastener for use in cold weather. OA-313 has an elongated cuff that allows it to be used by people of high growth. OAH-OA-314, has a shortened cuff, which allows it to be used by people of low stature.

The weight of the products is 3500-4000 gr. depending on the size.

Color: black, white, beige, blue, gray. Size: S, M, L, XL (matched to the size of the shoes).

Composition of products: 60% -polyester, 20% nylon, 12% -stal, 3% -cotton, 5% -polyenyl chloride, ribbon-velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

name	Overall dimensions, sm		Weight, rp	Execution variants on colour scale		
OS-21	Size	Circle of a thorax with an adressed hand (sm)	450-500	Black, white, beige, dark blue, grey		
	S/Î	To 100				
	L/XL	More than 100				
OS-11	Size	Length forearms (sm)	30-55	Black, white, dark blue, beige, grey		
OS-12						
OS-13					S	30-33
					M	33-36
					L	36-39
	XL	More than 39				
R-2	Width 8, length of straps - 48-56 with walk 2		55-60 with walk 1,25	White, black, beige, dark blue, grey		
R-1	Width 8, length of straps - 48-					

2022

	56 with walk 2					
R-3	Height 15 – 21 with walk 2, width 23-29 with walk 2					
OSR-21	Szie	Thorax circle at level of an axillary recess (sm)	90-105 walk 15	with	Black, white, beige, dark blue, grey	
	S/M	To 90				
	L/XL	More than 90				
	Height 16,5					
OSR-22	Size	Thorax circle at level of an axillary recess (sm)				
	S	75-80				
	M	80-85				
	L	85-90				
	X	90-95				
	Height 16,5					
OEU-11	Height 7,5, length 60		35-40		Black, white, beige, dark blue, grey	
OEU-12	Height 3,5. Length 60					
OEE-11	Size	Circle of an elbow joint (cm)	40-55 walk 1	with	Grey, beige, white, black, dark blue	
OEE-12						
OEE-13						
XS						To 24
S						24-26
M						26-28
L	28-31					
XL	More than 31					
Height 23,5						
OEH-21	Size	Circle of an elbow joint (sm)	70-85 walk 3	with	Grey, beige, White, black, dark blue	
OEH-22						
OEH-23						
S						To 26
M						26-28
L						28-31
XL	31-35					
XXL	More than 35					
Height 22,5						
OER-31	Height 43, width 35		2000-2500		Black, white, beige, dark blue, grey	
OHE-11	Height 10		25-35 walk 2	with	Grey, beige, white, dark blue, black	
	Size	Circle wrist joint (cm)				
	S	To 17				
	M	17-19				
	L	19-22				

	XL	22-24			
	XXL	More than 24			
OHE-12	Size	Circle wrist joint (cm)			
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-24			
	Height 10				
OHE-13	Height 10				
	Size	Circle wrist joint (cm)			
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-24			
OHG-21	Size	Circle wrist joint (cm)	25-40 with шаром3	Grey, beige, white, black, dark blue	
OHG-22					
OHG-23	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-26			
	XXL	More than 26			
	Height 17				
OMR-21	Height 16, length 34,5				
OMR-22	Size	Circle wrist joint (cm)			Grey, beige, white, black, Dark blue
	S/M	17-21			
	L/XL	21-26			
	Height 8				
OMR-23	Height 16, length 34,5				
OC-311	Height 26		90-110	Grey, beige, white, black, dark blue	
	Size	Circle wrist joint (cm)			
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-26			
	XXL	More than 26			
OC-312	Height 19		100-125		
	Size	Circle wrist joint (cm)			


	S/M	17-21			
	L/XL	21-26			
OC-313	Height 26			200-250	
	Size	Circle wrist joint (cm)			
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-26			
	XXL	More than 26			
OC-321	Size	Circle wrist joint (cm)		100-150	Grey, beige, white, black, dark blue
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-26			
	Height 19				
OC-322	Height 18, width 12			160	
OC-323	Size	Circle wrist joint (cm)		160	
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	22-26			
	Height 19				
OHR-31	Size	Circle wrist joint (cm)		100-150	Grey, beige, White, black, dark blue
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	More than 22			
	Height 26				
OHR-32	Height 21, length 27				
OHR-33	Size	Circle wrist joint (cm)			
	S	To 17			
	M	17-19			
	L	19-22			
	XL	More than 22			
	Height 26				

Orthosis for the hip joint OT-11

(right / left) (serial number 041)

Indications:

- instability of the hip joint;

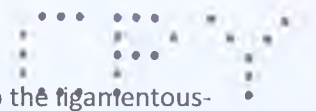

- The rehabilitation period after operations, changes in hip dislocations, damage to the ligamentous-muscular apparatus;

- Prevention of injuries of the hip joints, neck of the hip; prevention and treatment of loosening of the hip endoprosthesis.

Result of application:

- Hard fixation of the hip joint with the ability to adjust the angle of flexion-extension and reduction-retraction.

- prevention of development of contractures and muscle hypotrophy.

Made of plastic panel, equipped with soft textile inlays and two velcro strips, as well as one main strap. Thanks to the features, the orthosis can easily be mounted on the right and left hip joint. The modern high-tech hinge provides the possibility of independent adjustment of the flexion-extension volume in 10-degree increments and reduction-withdrawal in the range from minus 5 to 40 degrees.

The weight of the products is 2000-2500 gr. depending on the size.

Color: white, beige, black, blue. Dimensions: S, M.L, XL, XXL (the size is selected according to the hips).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride, tape, velcro.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for the hip joint of aeroprene with stiffeners OT-21

(right / left) (serial number 042)

Indications:

- period of rehabilitation after reconstructive operations (endoprosthetics, arthroplasty, etc.);

- isolated edge lines, detached, incomplete fractures of the large trochanter (by agreement of the attending physician);

- fresh fractures of the femoral neck, including in elderly patients;

- degenerative-dystrophic changes in the hip joint (aseptic necrosis of the femoral head, cystic perestroika, coxarthrosis, etc.);

- arthropathy;

- damage to the musculoskeletal system, directional dislocation, including in case of a sports injury;

- for prolonged physical and sports loads.

Result of application:

- orthosis ensures fixation, stabilization and partial unloading of the hip joint;
- improvement of coordination of work of muscles;
- orthosis can be used in combination with medical compression jersey;
- With exercises LFK bandage can not be removed.

Made of aeroprene - a soft, breathable, highly elastic neoprene with additional perforations all over the surface. In the pelvic component of the construction, depending on the size, 3-4 flexible metal, parallel stiffeners are used, as well as an elastic screed for adjusting the tension of the structure in the pelvic region. The girth and degree of fixation of the femoral component is also carried out by means of an elastic screed. On the coupler of the pelvic and femoral components there is a tape-tension indicator. Belt fastening is carried out with the help of two velcro fasteners.

The weight of products is 550-700gr. depending on the size.

Color: black, beige, white. Size: XS, S, M, L, XL (girth around the pelvic ring (measured 5 cm below the navel, cm)).

Ingredients: 30% neoprene, 27% cotton, 23% elastic, 20% lycra.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis for hip joint O-21 (serial number043)

Indications:

- Prostrate hip dislocation;
- dysplasia of the hip joint;
- subluxation of the hip.

Result of application:

- fixation of the hip joint in a functionally advantageous position without any strain on the shoulder girdle and spine of the child;
- promotes the correct formation and development of the acetabulum in children with hip dysplasia;
- Provides fixation of the hips in the position of bending and retraction at an angle of 90 degrees or more.

It is made of hypoallergenic, non-irritating skin polymeric materials.

The weight of the products is 100-150 gr. depending on the size.

Color: white, black, beige. Size: XS, S, M, L (the age of the child).

Ingredients: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene-butylene acetate copolymer, 15% fused polyurethane, 5% -cotton, velcro tape.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis to the hip joint reinforced with OT-31 (serial number 044)

Indications:

- dysplasia of the hip joints;
- subluxation of the thigh;
- Prostate hip dislocation;
- rehabilitation in the postoperative period.

Result of application:

- Provides fixation of the hip joints without any load on the shoulder girdle and spine of the child.

Made of plastic with metal construction. Inside there are soft gaskets.

In the model, the position of the lead in the hip joint can be changed step by step in steps of 10 degrees. The adjustable design allows 6 months to increase the volume of the tire belt following the growth of the child without moving to the next size.

The weight of the products is depending on the size.

Color: white, black, gray, beige. Size: S, M, L (the distance between the popliteal pits in the position of the lead in the hip joints, cm).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride, 3 Velcro tapes.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. Ability to use orthoses longer than the prescription

Orthosis soft supporting for cervical vertebrae (adult / child) CCA-1, CCV-1 (serial number 081 and 082)

Indication: used when

- Muscular torticollis;
- trauma of cervical spine;



- postoperative condition on the cervical spine;

correction of displacement of cervical vertebrae.

Result of application:

- The bandage limits the rotational, flexural and extension movements of the neck;
- Thermal action helps improve blood circulation, accelerate recovery and shorten recovery time.

Made of high-quality foam rubber, anatomical shape, one velcro closure, top protected with a sheath of cotton fabric.

The weight of the products is 50-100 gr. depending on the size.

Color: beige, black, white, gray, blue, cream.

Dimensions are selected by measuring the circumference of the neck and the height (from the chin to the jugular fossa, cm):

adult (CCA-108 (8.00 cm), CCA-109 (9.00 cm), CCA-110 (10.00 cm), CCA-111 (11.00 cm)),; Child (CCV-103 (3, 00 cm), CCV-104 (4.00 cm), CCV-105 (5.00 cm), CCV-106 (6.00 cm), CCV-107 (7.00 cm)).

Composition of products: 13% cotton, 50% polyester, 37% elastic.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Orthosis rigid supporting for cervical vertebrae CC-3 (serial number 83)

Indications:

- trauma of cervical spine;
- at the stage of transport evacuation;
- increased mobility of cervical vertebrae;
- displacement of cervical vertebrae;
- osteoporosis;
- osteomyelitis;
- oncological diseases;
- osteochondrosis;
- Postoperative period in the cervical spine.

Result of application:



- fixes and stabilizes the cervical spine.
- Unloads the ligamentous apparatus and the muscles of the cervical region.
- Creates a rigid support to the head.

It is made of a material on a person's plaster positive, it is fixed by two belts with a velcro closure, an opening in the area of the thyroid cartilage allows you to monitor the condition of the tracheostomy.

The weight of the products is 100-120 g. depending on the size.

Color: beige. Dimensions: S, M, L, XL (matched in the same way as bandages are soft).

Ingredients: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene / venil acetate copolymer, 15% -fused polyurethane, 5% cotton.


Storage conditions: The orthosis should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: dispose of the orthosis with household rubbish.

Shelf-life: not established. The possibility of using an orthosis longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. Do not discontinue the use of orthosis without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

name	Overall dimensions, sm	
CP-23	Size	Waist circle
	S	To 85
	M	85-95
	L	95-105
	XL	105-120
	XXL	120-135
	Height 23	
CP-31	Size	Waist circle
	S	To 85
	M	85-95
	L	95-105
	XL	105-120
	XXL	120-135
	Height 31	
KLS-1	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm
	XS	To 70
	S	70-85

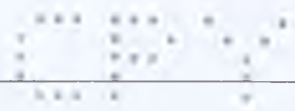

	M	85-97	
	L	97-105	
	XL	105-115	
	XXL	More than 115	
	Height 30		
KL-2	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm	
	XS	To 70	
	S	70-85	
	M	85-97	
	L	97-105	
	XL	105-115	
	XXL	More than 115	
	Height 20		
KL-3	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm	
	XS	To 70	
	S	70-85	
	M	85-97	
	L	97-105	
	XL	105-115	
	XXL	More than 115	
	Height 20		
KTL-2	Size	Growth, The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm	
	S	150-160 60-75	
	S1	160-170 60-75	
	M	160-170 70-85	
	M1	170-180 70-85	
	L	170-180 80-95	
	L1	180-190	

		80-95	Height 42,5-57/47,5-58,5 with walk 5
	XL	180-190 90-110	
	XL1	190-200 90-110	
	XXL	200-210 110-130	
KTL-4	Size	Growth, The sum of circles of a waist and hips, деленная half- and-half, sm	
	S	100-120 45-52	
	M	120-140 52-58	
	L	140-160 58-65	
	Height 30-40		
KTL-5	Size	Growth Sm	The sum окружностей a waist and hips, деленная half-and-half, sm
	S	150-160	60-75
	S1	160-170	60-75
	M	160-170	70-85
	M1	170-180	70-85
	L	170-180	80-95
	L1	180-190	80-95
	XL	180-190	90-110
	XL1	190-200	90-110
	XXL	200-210	110-130
KS-2	T Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-	

		half, sm	
	S	75-90	
	M	90-105	
	L	105-120	
	XL	120-135	
	Height 34-39		
KS-1			
	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm	
	S	75-90	
	M	90-105	
	L	105-120	
	XL	120-135	
	Height 46-54		
G-1	Size	Waist circle, sm	
	The universal	To 150 sm	
	Height 42		
G-2	Size	Circle of hips, sm	
	S	60-75	
	M	75-90	
	L	90-105	
	XL	105-115	
	XXL	115-125	
	Height 45		
KTL-3	Size	Waist circle	
	S	60-80	
	M	80-100	
	L	100-120	
	XL	120-140	
	Height 40		
PP-2	Size	Waist circle	
	S/M	70-95	
	L/XL	95-120	
	Height 33-39 with walk 6		
PP-3	Size	The sum Circles of a waist and hips, деленная half-and-half, ростом	
	XS	60-75 150-160	

	S	60-75 160-170
	M	70-85 160-170
	L	70-85 170-180
	XL	85-95 170-180
	XXL	90-110 170-190
	Height 42,5-57/47,5-58,5	
PPC-2	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm growth
	S	45-52 100-120
	M	52-58 120-140
	L	58-65 140-160
	Height 30-40 with walk 5	
KL-4	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm
	XS	To 70
	S	70-85
	M	85-97
	L	97-105
	XL	105-115
	XXL	More than 115
	Height 20	
KLU-1	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная Half-and-half, sm
	S/M	70-95
	L/XL	95-110
	Height 25	
KLS-2	Circle from 60-110 with walk 10, height 20	

KLS-3	Size	Waist circle	
	S	64-72	
	M	72-80	
	L	80-90	
	XL	90-100	
	XXL	100-110	
	Height 30		
KT-2	Size	The sum of circles of a waist and hips, деленная half-and-half, sm	
	XS	65-75	
	S	75-85	
	M	85-95	
	L	95-105	
	XL	105-115	
	XXL	115-125	
	XXXL	125-135	
OUC-11	Height 6, length 47		
OUC-12	Height 3, length 38		
OGH-1	Size	Waist circle	
	S	To 85	
	M	85-95	
	L	95-105	
	XL	105-115	
	XXL	More than 115	
CCA-1	Size are selected by measurement of a circle of a neck and heights (from a chin to яремной poles, sm): Adult (CCA-108 (8,00 sm), CCA-109 (9,00 sm), CCA-110 (10,00 sm), CCA-111 (11,00 sm); children's (CCV-103 (3,00 sm), CCV-104 (4,00 sm), CCV-105 (5,00см), CCV-106 (6,00 sm), CCV-107 (7,00см)).		
CCV-1			
CC-3	Size	Neck height	Neck circle
	S	5,7	25-33
	M		33-41
	L		41-46
	XL		46-48 and more
	S	8,3	25-33
	M		33-41
	L		41-46
	XL		46-48 and more
	S	10,8	25-33
M	33-41		
L	41-46		
XL	46-48 and more		
S		25-33	



	M L XL	13,3	33-41 41-46 46-48 sm and more	
--	--------------	------	--	--

Corset soft on the abdominal wall (narrow) 23 cm (CP-23) (serial number 084)

Corset soft on the abdominal wall (wide) 31 cm (CP-31) (serial number 085)

Indications:

- uncomplicated neuropathies of myopathy of the lower back;
- radiculitis and radiculosis;
- fixes the anterior and lateral abdominal walls;
- rehabilitation after surgery on the abdominal wall;
- The weakness of the abdominal wall.

Result of application:

- Moderate support, protection from cooling back muscles;
- Early mobilization after operations on the abdominal and abdominal organs;
- prophylaxis of the formation of hernia of the abdominal wall.

Manufactured by:

Equipped with a double valve for better fit of the belt to the body.

The mass of products CP-23 is 140-220g. depending on the size.

The mass of products CP-31 is 200-280g. depending on the size.

Color: white, beige, gray, black. Dimensions: S, M, L, XL, XXL (selected by measuring the circumference of the waist, cm).

Composition of products: 13% cotton, 50% polyester, 37% elastic.

Storage conditions: orthoses should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: orthoses should be disposed of with household garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using orthoses longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using orthoses without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Corset semi-rigid lumbosacral KLS-1 (serial number 086)

Indications:

-radiculitis, osteochondrosis, spondylarthrosis, spondylitis, spondylolisthesis, protrusion of intervertebral discs;

- rehabilitation after injuries and surgeries;

-functional therapy for pain in the lower back and lower part.

Result of application:

Hyperextension, reclination and discharge of the lumbosacral spine with compensation of the function of the back muscles;

-dosed fixation and unloading of the spine;

- with physical exertion has a stabilizing effect on the lumbosacral spine, stimulating the effect on the muscles of the back.

Made of durable high-quality material with breathable properties. The corset has two ties, equipped with a velcro fastener, to strengthen the fixation. The rear wall includes 4 ribs and grips the sacral section.

The weight of the products is 345-475 gr. depending on the size.

Color: beige, black. Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (the sum of waist circumferences and hips, divided in half, cm).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset semi-rigid lumbar KL-2 (serial number 087)

Indications:

-Bole syndrome on a background of muscle tension and muscular imbalance of vertebral displacements (spondylolisthesis I degree);

-functional therapy for lumbargia and ishalgia;

-prophylaxis of injuries and diseases when working with weights.

Result of application:

-hyperextension, reclining and unloading of the lumbar spine with compensation of the function of the back muscles;

-dosed fixation and unloading of the spine;

- with physical exertion has a stabilizing effect on the lumbar spine, stimulating effect on the muscles of the back.

Made of elastic mesh material. The corset has two ties, equipped with a velcro fastener, to strengthen the fixation. The location of the 4 stiffeners relieves muscle tension and, as a result, reduces pain. The width of the product is 20 cm.

The weight of the products is 210-265 gr. depending on the size.

Color: beige, black, white, gray, blue.

Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (the sum of waist circumferences and hips, divided in half, cm).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride, tape, velcro.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset semi-rigid lumbar reinforced KL-3 (serial number 088)

Indications:

- radiculitis;
- root syndrome;
- Localized osteochondrosis;
- spondyloarthrosis and spondylitis;
- intervertebral hernia;
- displacement of vertebrae;
- functional therapy for back pain.

Result of application:

- hyperextension, reclining and unloading of the lumbar spine with compensation of the function of the back muscles;
- dosed fixation and unloading of the spine;
- with physical exertion has a stabilizing effect on the lumbar spine, stimulating effect on the muscles of the back.
- Stabilizes the joint-ligament apparatus of the lumbar region.

Made of elastic mesh material. The corset has two ties, equipped with a velcro fastener, to strengthen the fixation. The location of the 6 stiffeners relieves muscle tension and, as a result, reduces pain. The width of the product is 25 cm. It is possible to wear a corset in a standard way or with a reclining effect.

The weight of the products is 330-440 gr. depending on the size.

Color: beige, black, white, gray, blue.

Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL (the sum of waist circumferences and hips, divided in half, cm).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Cortex chest-lumbar (adult) KTL-2 (serial number 089)

Corset chest-lumbar (child) KTL-4 (serial number 090)

Indications:

- formation of correct posture in adults and children;
 - bending of the thoracic spine;
 - osteochondrosis of the thoracic spine, osteoporosis;
 - protection of the stoop with a load on the spine (with sedentary work);
 - rehabilitation after injuries and operations of the thoracic spine;
- gizzards of intervertebral discs of the thoracic region.

Result of application:

Improves posture without restricting freedom of movement;

-reklation and unloading of the upper- and mid-thoracic sections with strengthening of the muscular corset of muscle tone.

Backrest made of non-elastic material, which does not interfere with muscle activity. The corset is fixed on the abdomen with a single velcro closure. There are 2 simulated stiffeners, located paravertebrally. Twisting of the shoulders is supported by two inextensible straps with velcro fasteners.

The weight of KTL-2 products is 300-440 gr. depending on the size.

The weight of KTL-4 products is 200-250 gr. depending on the size.

Color: beige, black, white, gray, blue.

Dimensions KTL-2: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1, XXL.

Dimensions KTL-4: S, M, L.

The composition of the products: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: corsets should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Conditions for disposal: corsets should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using corsets longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using corsets without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Cortex chest-lumbar reinforced KTL-5 (serial number 091)

Indications:

- violations of posture (stoop), accompanied by a pain syndrome in the lumbar region;
- curvature of the thoracic spine (kyphosis, scoliosis I-II degree);
- prevention of fractures on the background of osteoporosis;
- rehabilitation after operations and spinal injuries;
- Multiple herniated intervertebral discs of the thoracic region.

Result of application:

- improves posture, without limiting freedom of movement;
- Reclamation and discharge of the upper and middle thoracic parts with strengthening of the muscular corset, muscle tone;
- removal of muscle tension and, accordingly, elimination of pain syndrome.

It is made: a back from an inelastic material that does not interfere with muscular activity. The corset is fixed on the abdomen with one velcro closure. There are 2 simulated stiffeners, located paravertebrally. The reversal of the shoulders is supported by two non-stretchable straps with velcro fasteners. The design provides tension tapes for relieving muscle tension and, accordingly, eliminating pain syndrome.

The weight of the products is 390-540 gr. depending on the size.

Color: beige, black, white, gray, blue.

Dimensions KTL-5: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1, XXL.

Methods of donning:

The straps must be passed under the armpits and crossed on the back. Then, to straighten the patient's shoulders and fix the position of the shoulder belt, having secured the straps with velcro fasteners on the belt of the corset.

Recommended wearing regimen for posture correction:

- Starting from 1-1,5 hours on the first day, gradually within two weeks, increase the time to 6 hours per day;
- permanent wearing for 6 hours every day for 2 months;
- gradually within 2 weeks reduce to 1-1.5 hours on the last day of use;
- After 3 months, it is NECESSARY to consult a doctor.

Individual treatment and terms of wearing are determined by the attending physician!

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset lumbosacral hard KS-2 (serial number 092)

Indications:

Immobilization after surgery;

- grains of intervertebral discs of the lumbar and lumbosacral spine;
- vertebrae fractures in the lumbar region;
- spondylolisthesis with the threat of trauma to the roots of the spinal cord;
- instability in the lumbar spine for various reasons.

Result of application:

Hyperextension, reclination and discharge of the lumbosacral spine with compensation of the function of the back muscles.

Made of lightweight and durable materials. Inside the rigid corset is a soft lining. Six fixing belts are equipped with velcro fasteners.

The mass of products is 400-550 gr. depending on the size.

Color: gray, black, beige, white, blue. Dimensions: S, M, L, XL (the sum of waist circumferences and hips, divided in half, cm).

Ingredients: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene / venil acetate copolymer, 15% -fused polyurethane, 5% cotton.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset chest-lumbar hard KS-1 (serial number 093)

Indications:

Immobilization after surgery;

-grains of intervertebral discs of thoracic and lumbar spine;

vertebrae fractures in the thoraco-lumbar region;

-spondilolistesi with the threat of trauma to the roots of the spinal cord;

-instability in the chest-lumbar spine for various reasons.

Result of application:

Hyperextension, reclining and unloading of the thoraco-lumbar spine with compensation of the function of the back muscles.

Made of lightweight and durable materials. Inside the rigid corset is a soft lining. Eight fixing belts are equipped with velcro fasteners.

The weight of the products is 500-650 gr. depending on the size.

Color: gray, black, beige, white, blue. Dimensions: S, M, L, XL (the sum of waist circumferences and hips, divided in half, cm).

Ingredients: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene / venil acetate copolymer, 15% -fused polyurethane, 5% cotton.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset hard (hyperextensor) G-1 (serial number 094)

Indications:

- stable compression fractures of the vertebral bodies of the inferior thoracic and lumbar regions (Th10-L2) without neurologic symptoms.

Result of application:

- supports the hyperextension position in the thoraco-lumbar spine;
- helps to normalize the muscle tone in the area of damage;
- reduces thoracic kyphosis and increases lumbar lordosis, effectively unloading the anterior parts of the vertebral bodies;
- relieves or eliminates pain syndrome;
- a functional-advantageous position accelerates the restoration of the bone tissue of the vertebra in the fracture zone.

Result of application:

- helps maintain the necessary position of the vertebra in the sagittal plane due to the work of the patient's own muscles;

Feature: three-point support system, pelotas are attached in the region of the waist, sternum and symphysis; Modular design allows for precise adjustment; has a small weight.

The weight of products is 1500-2000 gr. depending on the size.

Color: gray, black, beige, white, blue. Dimensions: universal (allows to use orthosis in patients of different height and build, with waist circumference up to 150 cm).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset rigid (hyperextensor frame) G-2 (serial number 095)

Indications:

- stable compression fractures of the vertebral bodies of the inferior thoracic and lumbar regions (Th10-L2) without neurologic symptoms.

Result of application:

- supports the hyperextension position in the thoraco-lumbar spine;
- helps to normalize the muscle tone in the area of damage;
- reduces thoracic kyphosis and increases lumbar lordosis, effectively unloading the anterior parts of the vertebral bodies;
- relieves or eliminates pain syndrome;
- limits lateral flexion and rotational movements of the trunk;
- a functional-advantageous position accelerates the restoration of the bone tissue of the vertebra in the fracture zone.

Feature:

- frame design provides reliable stabilization, both in the sagittal and in the frontal plane;
- 3-point support system helps to restore the normal bending of the spine due to the work of your own muscles;

The modular design of the corset allows for precise individual fit;

- The sliding pelvic girdle can be fixed to the required level (it is convenient for full patients);
- the location of the sternal pelota, the height and width of the frame are easily adjustable;
- in contact with the surface of the chest, the angle of installation of the sternal pelota is automatically regulated by the movable block;
- Replaceable soft foam pads are fastened with Velcro fasteners;
- Corset has a small weight, easy to clean.

The weight of the products is 2300-2800 gr. depending on the size.

Color: gray, black, beige, white, blue. Dimensions: S, M, L, XL, XXL (hip circumference, see).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset chest-lumbar, semi-rigid KTL-3

(serial number 096)

Indications:

- osteochondrosis, spondylosis, spondylolisthesis;
- radiculitis;
- hernia of intervertebral discs of the lower thoracic, lumbar and sacral spine;
- the rehabilitation period after trauma and operations of the lower thoracic and lumbosacral spine;
- uncomplicated fractures of the processes of the bodies of the lumbar vertebrae.
- instability in the lumbar spine for various reasons.

Result of application:

Hyperextension, reclining and unloading of the thoraco-lumbosacral spine with compensation of the function of the back muscles.

Made of lightweight and durable elastic materials. The corset has two additional ties, equipped with a velcro closure, to strengthen the fixation. The location of the 4 stiffeners relieves muscle tension and, as a result, reduces pain. The width of the product is 35 cm. It is possible to wear a corset in a standard way or with a reclining effect.

The weight of the products is 210-265 gr. depending on the size.

Color: white, black, gray, beige, blue. Dimensions: S, M, L, XL (selected by measuring the circumference of the waist, cm).

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset Corrector Posture PP-2 (serial number 097)

Indications:

- violations of posture (stoop), accompanied by pain in the thoracic spine;
- curvature of the thoracic spine (kyphosis, scoliosis I-II degree);
- prevention of fractures on the background of osteoporosis;
- rehabilitation after operations and injuries of the thoracic spine;
- Multiple herniated intervertebral discs of the thoracic region.

Result of application:

- two shoulder straps fixed on the back of the corrector in the form of a triangle

Improves posture without restricting freedom of movement;

- reclining and unloading the upper and middle chest areas with strengthening of the muscular corset, muscle tone;
- removal of muscle tension and, accordingly, elimination of pain syndrome

A back is made of an elastic breathable material, which does not interfere with muscle activity. The corset is fixed on the stomach with one velcro strap. There are 2 stiffeners located on each side of the spine. The back of the shoulders is supported by two stretchable velcro straps.

The weight of the products is 300-350 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Size: S / M, L / XL (selected by measuring waist circumference and height, see)

Ingredients: 45% polypropylene, 30% nylon, 5% ethylene / vinyl acetate copolymer, 15% -fused polyurethane, 5% cotton.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset Corrector Posture PP-3, PPC-2 (serial number 098, 099)

Indications:

- formation of correct posture in adults and children;
- bending of the thoracic spine;
- osteochondrosis of the thoracic spine, osteoporosis;
- protection of the stoop with a load on the spine (with sedentary work);
- rehabilitation after injuries and operations of the thoracic spine;
- gizzards of intervertebral discs of the thoracic region.

Result of application:

- improves posture, without limiting freedom of movement;
- reclamation and discharge of the upper and middle thoracic parts with strengthening of the muscular corset of muscle tone;
- reliable fixation, which allows to form the correct beautiful posture
- possibility to use as an independent method of preventing postural disorders;
- Convenience in use (proofreader is invisible under clothes).

The back is made of cotton material, which does not interfere with muscle activity. The corset is fixed on the abdomen with a single velcro closure. There are 2 simulated stiffeners located parallel to the spine. Twisting of the shoulders is supported by two non-stretch straps with velcro fasteners.

The weight of PP-3 products is 390-540 gr. depending on the size.

The weight of PPC-2 products is 200-250 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions PP-3: S, M, L, XL, XXL.

Dimensions PPC-2: S, M, L (selected by measuring waist circumference and height, see)

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Lumbar corset KL-4 (serial number 100)

Indications:

- osteochondrosis, spondylosis, spondylolysis in the lumbosacral spine, including with pain syndrome;
- radiculitis, myositis, bruises of the lumbosacral spine;
- The recovery period after injuries and operations in the lumbosacral spine;
- prevention of damage to the lumbosacral spine during intensive physical exertion

Result of application:

- semi-rigid fixation of the lower thoracic and lumbosacral spine;
- unloading the back muscles;
- analgesic effect.

Made of elastic "breathable" material that does not cause skin irritation; elastic double screed with Velcro fastener provides additional fixation; The required rigidity is provided by 4 metal fins.

The weight of the products is 330-440 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions KL-4: S, M, L, XL, XXL. (selected by measuring the circumference of the waist, see)

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Lumbar corset KLU-1 (serial number 101)

Indications:

- ablation of the abdominal cavity;
- myositis, lumbalgia;
- pain in degenerative diseases of the lumbosacral spine (osteochondrosis, spondylosis, etc.)
- rehabilitation after injuries and operations in the lumbar spine;
- painful syndrome in osteoporosis;
- herniated intervertebral discs of the lumbar spine.
- preventive use in case of exercise and sports

Result of application:

- provides a semi-rigid fixation of the lumbosacral spine;
- analgesic effect;
- unloads muscles and restores the physiological position of the spine;
- facilitates and eliminates pain syndrome;
- supports the anterior abdominal wall.

Made of elastic air-and moisture-permeable material, which does not cause skin irritation; has two types of size, which is regulated by an additional one removable cuff on 1 velcro fastener; is equipped with four metal plates that take the shape of the body.

The weight of the products is 220-270 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions KL-3: S / M, L / XL (selected by measuring the circumference of the waist, see)

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset lumbosacral KLS-2 (serial number 102)

Indications:

- rehabilitation after operations on the sacral and lumbar spine;
- acute and chronic pain due to spinal injuries;



- uncomplicated fractures of the processes of the bodies of the lumbar vertebrae;
- lumbosacral radiculitis, lumbago, lumbargia;
- back pain caused by excess weight and muscle failure;
- hernia of intervertebral discs;
- inflammation of the sacroiliac joint;
- degenerative displacement of vertebrae;
- bruises of the lumbosacral spine;
- after manual therapy and medical gymnastics;

Results of application:

- strong fixation of the lumbosacral spine;
- 4 simulated, removable stiffeners allow to achieve anatomically correct corset position and provide the maximum support;
- unloads the spiny-sacral department of the spine;
- improves sensorimotor control, provides stabilization due to activation of own muscles;
- helps to reduce pain.

Manufactured: breathable moisture separating material with a high content of cotton. 3 convenient velcro fasteners (one main and two additional) for stronger fixation, four metal tires.

The weight of the products is 220-270 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions: S, M, L, XL, XXL (selected by measuring the circumference of the waist, see)

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Corset lumbosacral KLS-3 (serial number 103)

Indications:

- Rehabilitation after injuries and rehabilitation in the lumbosacral region of the spine;
- painful syndrome in osteoporosis;

- Pain syndrome in osteochondrosis and other degenerative diseases of the lumbosacral spine;
- back pain caused by excess weight and muscle failure;
- hernia of intervertebral discs;
- inflammation of the sacroiliac joint;
- degenerative displacement of vertebrae;
- bruises of the lumbosacral spine.

Results of application:

- creates a functionally advantageous position;
- unloads the muscles of the back;
- reduces the phenomenon of inflammation and stimulates the recovery processes, thereby facilitating and eliminating pain syndrome;
- slows the progression of the disease.

Made of: a durable elastic air and moisture-permeable hypoallergenic material. A straight, high model with four functionally curved plates is fixed in front with a robust single velcro fastener; On the back wall there are two crossing reinforcement bands, which allow to regulate the degree of fixation; is equipped with four metal plates.

The weight of the products is 220-270 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions: S, M, L, XL, XXL (selected by measuring the circumference of the waist, see)

Ingredients: 60% polyester, 20% nylon, 12% steel, 3% cotton, 5% polyvinyl chloride.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Breast corset (thoracic) CT-2 (serial number 104)

Indications:

- Rehabilitation period after operations on the thorax;
- trauma of the chest.

Results of application:

- complete fixation of the thorax;

- creates optimal conditions for the healing of postoperative scars;
- reduction of pain in the wound area.

Made: the corset is made of elastic material, which helps to tighten the chest and prompt healing of the wound. One Velcro fastener is located either on the front surface of the chest or on the side. The corset has a special anatomical shape, which allows to optimally arrange the bandage on the chest. On the back of the corset has two plastic stiffeners, which are located symmetrically on each side of the spine. Two straps, thrown over the shoulder straps, contribute to better fixation of the bandage.

The weight of products is 550-700 gr. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL (volume of the chest, see)

Ingredients: 30% neoprene, 27% cotton, 23% elastic, 20% lycra.

Storage conditions: The corset should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: corset should be disposed of with domestic garbage.

Shelf-life: not established. The possibility of using a corset for longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. It is not allowed to stop using the corset without consulting with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the corset while observing the instruction and operating rules.

Orthosis umbilical (child) OUC-11 and OUC-12 (serial number 105 and 106)

Indications:

- Conservative treatment of umbilical hernias in children under 6 years of age;
- prophylaxis of prolapse and infringement of a hernial sac

It is made of: a durable and elastic combined material and very pleasant to the touch, made of environmentally friendly and hypoallergenic materials. It is fixed on the body with a single reliable velcro fastener. It is recommended to put on lying down, after the correction of the hernial protrusion.

The weight of OUC-11 is 35 g. depending on the size.

The weight of OUC-12 is 40 g. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

The sizes are universal.

Ingredients: 13% cotton, 50% polyester, 37% elastic.

Storage conditions: The orthosis should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: dispose of the orthosis with household rubbish.

Shelf-life: not established. The possibility of using an orthosis longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. Do not discontinue the use of orthosis without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis, subject to the instruction and operating rules

Orthosis of inguinal OGH-1 (serial number 107)

Indications:

-Postoperative period

- Inward hernia of the inguinal and femoral regions

- Hernias formed after operations on the groin area

- prevention of infringements and relapses of inguinal hernias.

Results of application:

Due to the design of the inguinal bandage and its peloids, mechanical support is provided for the formation of inguinal hernias and prevention of the formation of strangulated hernias, as well as an increase in the hernial sac.

Made of: from perforated material, does not cause irritation. Equipped with four removable pelots, which can either increase or decrease the pressure on the area of the hernial protrusion.

Two-sided groin bandage is put on lying, on underwear, with full correction of the hernia. Then in the "pockets" is installed a removable pelot, and the belt is fixed with a single velcro fastener.

Product weight 100-150g. depending on the size.

Color: beige, black, gray, white, blue.

Dimensions: S, M, L, XL, XXL (the volume of the circumference between the waist and hips, see)

Ingredients: 13% cotton, 50% polyester, 37% elastic.

Storage conditions: The orthosis should be stored at room temperature, in dry rooms, away from heat sources, direct sunlight and dust.

Disposal conditions: dispose of the orthosis with household rubbish.

Shelf-life: not established. The possibility of using an orthosis longer than prescribed by the course of treatment should be agreed with the doctor. Do not discontinue the use of orthosis without agreement with the attending physician.

Warranty period: 6 months from the date of sale of the orthosis while observing the instruction and operating rules.

Cleaning and disinfection

The surface of products with rigid fixing should be wiped with a damp sponge, detergent solutions in accordance with GOST 25644 and dried at a temperature not exceeding 40 ° C.

Do NOT dry near heating appliances and avoid direct sunlight. products can lose shape.

Coverings of foamed polymeric material should be wiped with a soft cloth moistened with household detergent, dried at a temperature of 18-20 °C away from the heaters.

Instructions for washing:

- When the first wash, wash the products separately from other laundry.
 - The products should be hand washed (40 ° C), especially if you apply ointments to treat the feet.
 - After washing, rinse the product thoroughly and repeatedly.
 - Use detergent without bleach (shampoo, baby soap).
 - When washing, do not use products that soften the laundry.
 - After washing, dry your products in air or in a washing machine in a gentle mode.
- Do not dry damp products on a towel or in direct sunlight.
- Do not clean the product.

1. Sanitary treatment of bandages on the cervical spine:

Wash the bandage as it gets dirty, at least once a month, the amount of washes is up to 150 times, an additional cover for the bandage is erased daily.

2. Sanitary treatment of compression knitwear:

Daily washing only by hand. Withstands up to 200 washes.

3. Sanitary treatment of fixatives on the upper and lower limbs:

Washing as it is contaminated, 3 times a month, can withstand up to 250 washes.

4. Sanitary treatment of fixatives on the upper and lower limbs with silicone inserts:

Washing as it gets dirty, 3 times a month, can withstand up to 200 washes.

5. Sanitary treatment of elastic retainers on the upper and lower limbs:

Washing as much as possible, at least 3 times a month, can withstand up to 150 washes.

6. Sanitary treatment of elastic belts

Laundry is not less than once a week, the maximum amount of washing is 100.

7. Sanitary treatment of corsets on the thoracic, lumbar and sacral spine:

Laundry as contamination, at least once a month, the maximum amount of washing 180 times.

中華民國文件證明書 DOCUMENT AUTHENTICATION

1. 國家／地區： 中華民國（臺灣）
Country: Republic of China (Taiwan)

此公文書
This public document

2. 簽署人
has been signed by 江佩瑜
Chiang, Pei-yu

3. 簽署人職務
acting in the capacity of 民間公證人
Notary public

4. 用印人／單位
bears the seal/stamp of 嘉義地方法院
Chiayi District Court

茲證明
Certified

5. 地點
at 嘉義
Chiayi

6. 日期
the November 12, 2018

7. 由
by 外交部
Ministry of Foreign Affairs

8. 案號
Number 106100041655-002

9. 章戳
Seal/stamp: 10. 簽署
Signature:

Fan, Guang-fu

Director, Southwestern Taiwan Branch Office, BOCA

For The Minister of Foreign Affairs

11. 附註：
remarks:

This document authentication only certifies the authenticity of the signature, seal or stamp and the capacity of the person who has signed the attached document. It does not validate the contents of the document for which it was issued.

本證明書之真實性，請向下列網址查詢：
To verify the issuance of this authentication,
please peruse the following website：
<https://docauth.boca.gov.tw/BOCAWeb/index4.jsp>



G030162



Transportation of packaged products must be carried out in closed railway wagons, containers, cars, in ship holds, heated and sealed aircraft compartments in accordance with the requirements of the rules applicable to this mode of transport, under the following environmental conditions:


- ambient temperature from -10 to + 40 ° C;
- Relative humidity - no more than 70%;
- conditions of product transportation - according to group 5 according to GOST 15150.


Products must be stored in clean, dry, closed rooms under the following conditions:

- ambient temperature from -10 to + 40 ° C;
- Relative humidity - no more than 70%;
- Protect from indirect and direct exposure to sunlight and artificial light.

Authorized representative of the manufacturer in the Russian Federation (name, address, telephone, mail)

Limited Liability Company "Athlett" (LLC "Athlett")
Address: 420044, Russia, Republic of Tatarstan, Kazan, ul. Korolenko, 73, Apt. 52
Phone: + 7-843-515-12-95
Mail: atlett@bk.ru

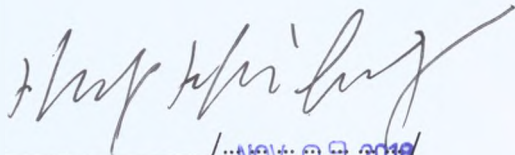
_____/NOV. 09 2018
(Signature)

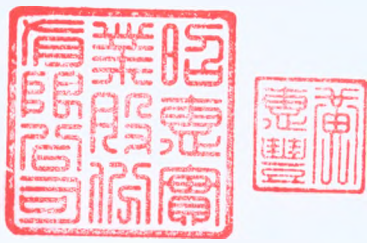

The press

本公證人僅認證文書 ☐ 中文 內容, ☒ 英文 其他外國語文不在認證之列。
Notary Public certifies the ☐ Chinese version only. ☒ English

107Chia-Yuan-Min-Jen-Yu-Tzu 日期: NOV. 09 2018
e No. 681 Date: NOV. 09 2018
昭惠實業股份有限公司黃惠豐 之簽名或蓋章, 在臺
灣彰化地方法院所屬民間公證人江佩瑜事務所認證。
公證人: 江 佩 瑜
Witnessed at the Chiang, Pei-Yu Notary Public Office, Taiwan
Chiayi District Court, R.O.C., that the signature(s)/seal(s)
Yasco Enterprise Corp. in this document is/are authentic.
HUANG HUI-FENG
Notary Public 
Chiang Pei-Yu

For The Contents Of This Document
The Notary Public Assumes No Responsibility.

The Chiang, Pei-Yu Notary Public Office,
Taiwan Chiayi District Court, R.O.C.
Address : No.209, Linsen E. Rd., East Dist.,
Chiayi City, Taiwan (R.O.C.)
Tel:886-5-2751123 Fax:886-5-2753123

КИТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ТАЙВАНЬ)
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1. Страна: Китайская Республика (Тайвань)

Настоящий официальный документ

2. подписано Цзян, Пейю

3. в качестве Нотариуса

4. содержит печать/штамп Районного суда Цзяи

Подтверждено

*Печать: Министерство иностранных дел
Китайской Республики
Юго-Западный Тайванский Отдел*

5. в г. Цзяи

6. 12 ноября 2018 года

7. кем: Министерство иностранных дел

8. Номер: 106100041655-002

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

Фан, Ганфу /подписано/

Директор, Юго-Западный Тайванский
Региональный Отдел, БОКА

От имени министерства иностранных дел

11. Примечания:

Тисненая печать: Министерство иностранных дел Китайской Республики

Настоящее удостоверение документа подтверждает только действительность подписи, печать или штамп и должность лица, подписавшего вложенный документ. Он не подтверждает содержание документа, для которого он был выдан.

Для проверки факта выдачи настоящего удостоверения,
пожалуйста, посетите следующую электронную
страницу:

<https://docauth.boca.gov.tw/BOCAWeb/index4.jsp>

/QR-код/

/штрих-код/
G030162

подпись/ 09 ноября 2018 года
(подпись)

Оттиск

Штамп: Нотариус заверяет
☐ Только китайскую версию.
☒ Английскую

Штамп: 107-Цзян-Юанг-Минь-Йен-Ю-Тзу:
Дело №: 681 Дата: 09 ноября 2018 года
Заверено в нотариальной конторе нотариуса Цзян, Пею, Тайвань
Районный суд Цзяи, К.Р., что подпись(и)/печать(и)
Яско Энетпрайс Корп. является подлинной(ми).
Хуан Ху Фен

Нотариус */подписано/*
Цзян, Пею

Нотариус не несет ответственности за содержание данного документа.

Нотариальная контора нотариуса Цзян, Пею,
Районный суд Цзяи Тайвань, К.Р.,
Адрес: № 209, Линсен И. Рд., Ист Дистрикт,
Цзяи, Тайвань (К.Р.)
Тел.: 886-5-2751123 Факс: 886-5-2753123

Печать: Нотариальная контора нотариуса Цзян, Пею
Районный суд Цзяи Тайвань
Китайская Республика
Нотариус, Цзян Пею

Перевод данного текста выполнен переводчиком Егоровой Алиной Алексеевной

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого декабря две тысячи восемнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Егоровой Алины Алексеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018-

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 129 лист(-а, -ов).

Нотариус: