

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Дилуэнт для ручного разведения образцов при количественном
определении прогестерона иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Прогестерон Дилуэнт для ручного разведения
(Alinity i Progesterone Manual Diluent)»**

Alinity i

**Progesterone
Manual Diluent**


Progest Manual Diluent

REF 08P3640

MANUAL DILUENT

1 x 5 mL

CONTAINS: AZIDE

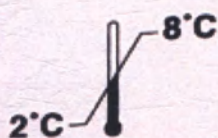

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD



PRODUCT OF IRELAND



en

Progest

REF 08P3640

G72862R02

D8P360

Additional Storage

Alinity i
Progesterone
Manual Diluent

Progest Manual Diluent

REF 08P3640

MANUAL DILUENT

1 x 5 mL

CONTAINS: AZIDE



Abbott Ireland
 Diagnostics Division
 Lifford, Longford
 Co. Longford
 Ireland
 +353-43-3331000


IVD

CE

PRODUCT OF IRELAND

Alinity i Progesterone Manual Diluent

Read Instructions Carefully. Reprinted April 2018.

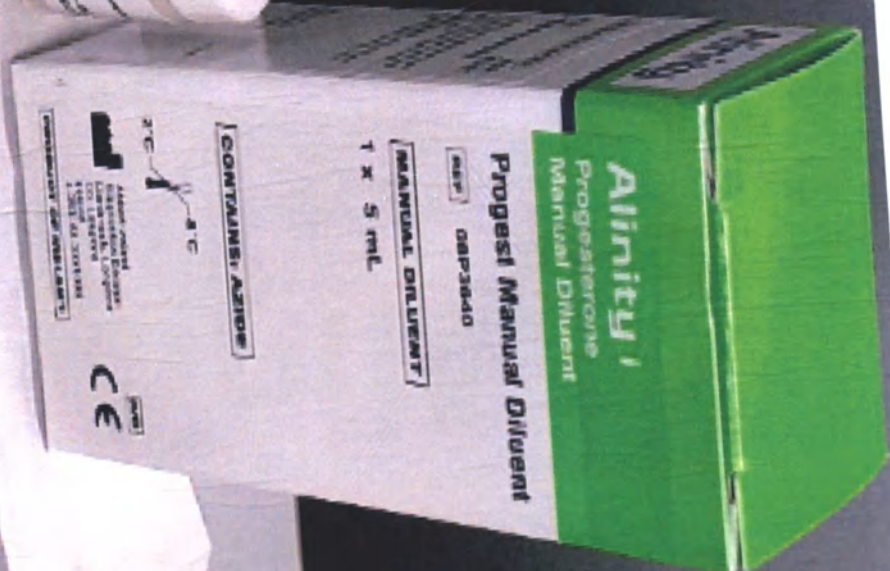

EN
Progesterone
Manual Diluent
REF: DBP3640
Q72862502
DBP360

NAME
Alinity i Progesterone Manual Diluent (also referred to as progesterone manual diluent)

INTENDED USE
The Alinity i Progesterone Manual Diluent is used for manually diluting specimens for testing using the Alinity i Progesterone reagent kit on the Alinity i analyzer. For additional information, refer to the Alinity i Series Operations Manual, package insert and the Alinity i Series Operations Manual.

CONTENTS


DBP3640
1 x 5 mL

STORAGE

Do not use past expiration date		
Storage Temperature	Maximum time storage	Instructions
Unopened 2 to 8°C	Until expiration date	
Opened 2 to 8°C	Until expiration date	Remove tightly capped. Return to refrigeration storage after use.

INDICATIONS OF INSTABILITY OR DEGRADATION
Instability or deterioration should be suspected if there are precipitates, visible signs of leakage or swelling.

SAMPLE DILUTION PROCEDURES
Refer to the Sample Dilution Procedures section of the Alinity i Series Operations Manual.

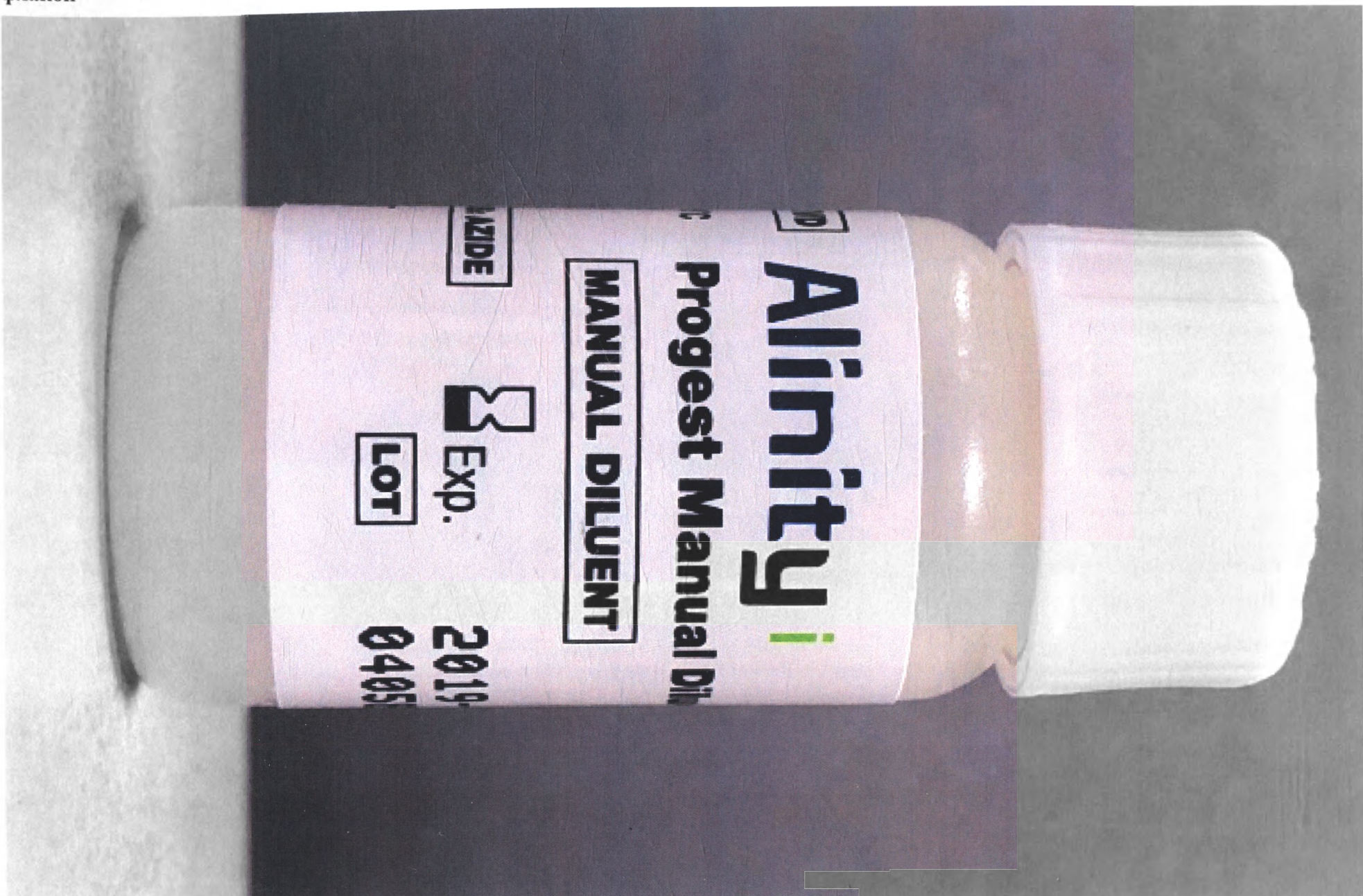

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 ЛИСТОВ



Подпись