

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”

SFM Hospital Products GmbH GmbH/

СФМ Госпитал Продактс ГмбХ


Managing Director /

Управляющий Директор

(Должность/position)

Lindner Vera/Вера Линднер

(Имя/Name)

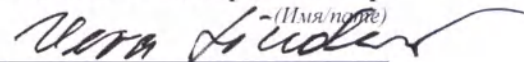

(подпись/signature)

«10» июня 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**Перчатки хирургические одноразовые стерильные
полиизопреновые SFM®**



Наименование медицинского изделия

Перчатки хирургические одноразовые стерильные полиизопреновые SFM[®], варианты исполнения:

см. Приложение №1

Разработчик/Официальный производитель медицинского изделия:

«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH), Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия).

Тел. +49-30-639-78-825

факс: +49-30-639-08-519

Производственные площадки:

1. «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH), Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия).

Тел. +49-30-639-78-825

факс: +49-30-639-08-519

2. ЗАО НПО «ГАРАНТ», 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1, Россия
Т. + 495 - 789-38-01, +495 - 745-05-56.

Классификация медицинского изделия

Согласно Директиве Совета ЕС 93/42/ЕЕС от 14.06.1993 года медицинское изделие отнесено к классу 2 А.

Номенклатурная классификация по видам в соответствии с GMDN

11-883 Gloves, surgical – перчатки хирургические

Назначение медицинского изделия/Показания

Для защиты пациента и медицинского персонала от взаимного заражения во время проведения хирургических операций.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов. При наличии у персонала аллергических реакций рекомендуется использовать неопудренные перчатки.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты, используемые в производстве перчаток. Возможно появление кожных раздражений как следствие неправильного ухода за кожей рук и жестких условий изоляции кожи рук от естественной вентиляции воздухом.

Описание, технические характеристики, основные принципы, на которых основана работа медицинского изделия

Перчатки анатомические. Парные на правую и левую руку.

По причине анатомической (изогнутого внутрь большого пальца, с прямыми и изогнутыми пальцами) формы перчатки парные перчатки разделяются на ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ, что указано на первичной упаковке. Размер перчатки указан на упаковке.

Изделие выступает в качестве барьера между пользователем и пациентом. Это стерильное изделие для снижения риска заражения. Обладая эластомерными характеристиками, она обеспечивает легкость надевания, имеет анатомическую форму для облегания руки пользователя. Она обеспечивает защитный барьер между пользователем и пациентами при допустимой толщине.

Размер

5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

Масса

	неопудренные 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.	опудренные 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.
Масса, г*	8,0 +3 г	17,0 +5 г

*Указаны данные с учетом параметров, которые влияют на массу.

Размеры и допустимые отклонения

Размер	Ширина, мм	Длина, не менее мм	Толщина, не менее мм
5	67 ± 4	250	0,10 – для гладких участков 0,13 – для текстурированных участков
5,5	72 ± 4	250	
6	77 ± 5	260	
6,5	83 ± 5	260	
7	89 ± 5	270	
7,5	95 ± 5	270	
8	102 ± 6	270	
8,5	108 ± 6	280	
9	114 ± 6	280	

Характеристики растяжения, Н, %, не менее

Характеристики	Полиизопреновые
1. Усиление при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	12,0
2. Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	600
3. Усиление при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	10,0
4. Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	550

Остаточное содержание опудривающего вещества для опудренных и неопудренных перчаток

Для неопудренных перчаток не более 2 мг на одну перчатку

Для опудренных перчаток не более 10 мг/дм².

Параметры адгезивной полосы (расположение, длина, ширина, степень адгезии)

Расположение - по краю внутренней поверхности манжеты.
Длина – по всей поверхности перчатки.
Ширина – от 15 мм до 25 мм.
Степень адгезии - 20-25 Н/см².

Форма и габариты упаковки (бумага или полиэтилен)

Габариты

Первичная упаковка:

ширина, не более 20 см
длина, не более 40 см
толщина, не более 2 см

вторичная упаковка:

ширина, не более 30 см
длина, не более 40 см
толщина, не более 2 см

третичная/групповая упаковка:

ширина, не более 35 см
длина, не более 70 см
высота, не более 40 см

транспортная:

ширина, не более 50 см
длина, не более 100 см
высота, не более 50 см

Форма упаковки

1. Первичная - прямоугольник или квадрат.
2. Вторичная - прямоугольник или квадрат
3. Третичная/групповая и транспортная - параллелепипед или куб.

Ширина сварного шва

от 8 мм до 20 мм

Толщина и плотность упаковочного материала

Бумага

Толщина - от 0,06 мм до 0,42 мм

Плотность - 35 г/м2 до 500 г/м2

Картон

Толщина - от 0,2 мм до 15 мм

Плотность - 100 г/м2 до 1200 г/м2

Полиэтилен

Толщина - от 0,1 мм до 1 мм

Плотность - 0,1 г/см3 до 0,96 г/см3

Прочность на растяжение упаковочного материала

полиэтилена – от 60 кг/ см2 до 200 кг/см2

бумаги – от 0,1 кН/м до 13 кН/м

картона от 1 кН/м до 11 кН/м

Коэффициент AQL

от 0,50 до 2,5

Материал

Вариант исполнения		Материал/Цвет	Марка/Производитель
см. Приложение №5		полиизопрен	Sigma-Aldrich 104389-31-3 (Sigma-Aldrich Corporation)
опудренные		кукурузный крахмал	Sigma-Aldrich S9765 (Sigma-Aldrich Corporation)
не опудренные	одинарная хлоринация	хлорная кислота	Sigma-Aldrich 24520 (Sigma-Aldrich Corporation)
	двойная хлоринация	хлорная кислота	Sigma-Aldrich 24520 (Sigma-Aldrich Corporation)
	внутреннее полимерное покрытие	полиуретан	Sigma-Aldrich 446084 (Sigma-Aldrich Corporation)
		силикон	Sigma-Aldrich S5631 (Sigma-Aldrich Corporation)
		акрилонитрил	Sigma-Aldrich 31564 (Sigma-Aldrich Corporation)
Красители			
---		натуральный	Remazol Brown 18
---		белый	C.I. Pigment White 2

---	желтый	Remazol Ultra Yellow RGBN
---	бело-желтый	Pigment Yellow 14
---	коричневый	Fat Brown B
---	розовый	Imperon Brilliant Pink K-3BL
---	зеленый	Imperon Green K-GC
---	синий	Remazol Blue RGB
---	черный	Procion Black PX-N

Упаковка

Первичная: бумажный (Бумага марки SHANYIN, производитель Peak Medical Packaging Co. Ltd.)
Вторичная: бумажный (верхний рулонный материал бумага медицинского назначения марки SHANYIN, нижний рулонный материал бумага медицинского назначения марки SHANYIN и полиэтилен марки PE6148C, производитель Peak Medical Packaging Co. Ltd.) или полиэтиленовый пакет (верхний рулонный материал полиэтилен марки PE6148C, нижний рулонный материал нейлоновая пленка марки PE6148C, производитель Peak Medical Packaging Co. Ltd.)

Третичная/групповая: картонная коробка (Бумага марки SHANYIN, производитель Peak Medical Packaging Co. Ltd.) или полиэтиленовый пакет (Полиэтилен марки PE6148C, производитель Peak Medical Packaging Co. Ltd.), Транспортная: коробка картонная (Бумага марки SHANYIN, производитель Peak Medical Packaging Co. Ltd.)

Упаковка

Перчатки завернуты в бумагу и помещены в стерильный пакет.

Первичная (бумага): 1 шт., 2 шт. (1 пара), 4 шт.* (2 пары)

Вторичная (бумага или полиэтиленовый пакет): 1 шт., 2 шт. (1 пара), 4 шт.* (2 пары)

Третичная/групповая (коробка картонная или полиэтиленовый пакет) 1 шт., 2 шт. (1 пара), 4 шт. (2 пары), 6 шт. (3 пары), 8 шт. (4 пары), 10 шт. (5 пар), 20 шт. (10 пар), 30 шт. (15 пар), 40 шт. (20 пар), 50 шт. (25 пар), 80 шт. (40 пар), 100 шт. (50 пар), 150 шт. (75 пар), 200 шт. (100 пар).

Транспортная: коробка картонная, в которой количество вторичных упаковок 1 шт., 2 шт., 4 шт., 6 шт., 8 шт., 10 шт., 12 шт., 18 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 150 шт., 200 шт.

**варианты комплектации двойных перчаток:*

Yellow

14

t Pink K-

K-GC

GB

K-N

Co. Ltd.)
SHANYIN,
лен марки
рулонный
PE6148C,

ckaging
ckaging Co.
ckaging Co.

)
(1 пара),
(15 пар),
200 шт.

, 2 шт.,
т., 200

Вариант исполнения	Неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком или без валика, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, коричневый, розовый, зеленый, синий, чёрный, размер: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	Опудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком или без валика, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, коричневый, розовый, зеленый, синий, чёрный, размер: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
Вариант исполнения		
Неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком или без валика, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, коричневый, розовый, зеленый, синий, чёрный, размер: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	+	+
Опудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком или без валика, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, коричневый, розовый, зеленый, синий, чёрный, размер: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	+	+

Макет маркировки первичной упаковки

1. размер;
2. обозначение «левая» (или Л) или «правая» (или П);
3. перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество (для опудренных перчаток).

L Л ВНИМАНИЕ: Пользователь должен учитывать, что перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.	R П ВНИМАНИЕ: Пользователь должен учитывать, что перед использованием перчаток следует стерильно удалить опудривающее вещество.
размер левая	размер правая

Макет маркировки вторичной/третичной/групповой упаковки

1. наименование изделия;
2. торговая марка изготовителя;
3. логотип изготовителя;
4. использованный материал;
5. анатомические;
6. текстурированные или гладкие;

7. опудренные или неопудренные;
8. хирургические;
9. манжета с валиком или без валика;
10. с адгезивной полосой или без адгезивной полосы;
11. Стерильно, однократного использования
12. Апиrogenно, нетоксично
13. хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие;
14. содержание: ПАРА (2 перчатки) или 2 ПАРЫ (4 перчатки)
15. размер внутренних перчаток;
16. размер внешних перчаток;
17. наименование, адрес и телефон изготовителя;
18. идентификационный номер по каталогу изготовителя (артикул);
19. штрих-код;
20. условия хранения и воздействие климатических факторов;
21. номер партии /LOT/;
22. дата изготовления;
23. срок годности;
24. номер Регистрационного Удостоверения;
25. наименование, адрес и телефон Уполномоченного Представителя;
26. стерильность гарантирована при целостности упаковки
27. Перед использованием необходимо стерильно удалить опудривающее вещество (для опудренных)
28. количество шт. / пар.

 LOT Партия   Количество в коробке	  Перчатки хирургические одноразовые стерильные полиизопреновые SFM® <i>Опудренные, текстурированные, манжета без валика, без адгезивной полосы, хлоринация однократная, цвет белый</i> размер 7,0 АНАТОМИЧЕСКИЕ. Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Перед использованием необходимо стерильно удалить опудривающее вещество. Стерильно, апиrogenно, нетоксично. РУ № от «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH) Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия) Тел.: +49-30-639-78-825 Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ» Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр. 1 Тел.: +7-495-789-38-01 STERILE R  (01)40889977710925(17)134568           
--	--



Перчатки хирургические одноразовые стерильные полиизопреновые SFM®



Внутренние перчатки неопудренные, гладкие, манжета с валиком, без адгезивной полосы, хлоринация


двойная, цвет зеленый размер 7,5

Внешние перчатки опудренные, текстурированные, манжета с валиком, без адгезивной полосы,

цвет натуральный размер 7,0

LOT

Партия

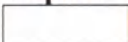

АНАТОМИЧЕСКИЕ. Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Перед использованием необходимо стерильно удалить опудривающее вещество. Стерильно, апирогенно, нетоксично.

РУ № от

«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH)

Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия)

Тел.: +49-30-639-78-825

Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ»

Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1

Тел.: +7-495-789-38-01

STERILE EO

Количество



(01)40889977710925(17)134568

Макет маркировки транспортной упаковки

1. наименование изделия;
2. торговая марка изготовителя;
3. логотип изготовителя;
4. использованный материал;
5. анатомические;
6. текстурированные или гладкие;
7. опудренные или неопудренные;
8. хирургические;
9. манжета с валиком или без валика;
10. с адгезивной полосой или без адгезивной полосы;
11. Стерильно, однократного использования
12. Апирогенно, нетоксично
13. хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие;
14. содержание: ПАРА (2 перчатки) или 2 ПАРЫ (4 перчатки)
15. размер внутренних перчаток;
16. размер внешних перчаток;
17. наименование, адрес и телефон изготовителя;
18. идентификационный номер по каталогу изготовителя (артикул);
19. штрих-код;
20. условия хранения и воздействие климатических факторов;
21. номер партии /LOT;
22. дата изготовления;
23. срок годности;
24. номер Регистрационного Удостоверения;
25. наименование, адрес и телефон Уполномоченного Представителя;
26. стерильность гарантирована при целостности упаковки



Перчатки хирургические одноразовые стерильные полиизопреновые SFM®

Неопудренные, гладкие, манжета с валиком, без адгезивной
полосы, хлоринация двойная, цвет белый

размер 5,0



LOT

Партия

АНАТОМИЧЕСКИЕ. Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Перед использованием необходимо стерильно удалить опудривающее вещество. Стерильно, апиrogenно, нетоксично.

РУ № от

«СФМГоспитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH)
 Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия)
 Тел.: +49-30-639-78-825

Уполномоченный представитель: **ЗАО НПО «ГАРАНТ»**
 Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1
 Тел.: +7-495-789-38-01

Количество в
коробке

STERILE R

















(01)40889977710925(17)1345



*Перчатки хирургические
одноразовые стерильные
полиизопреновые SFM®*



Внутренние перчатки неопудренные, гладкие, манжета с валиком, без адгезивной полосы, хлоринация двойная, цвет синий размер 8,5

Внешние перчатки- неопудренные, гладкие, манжета без валика, с адгезивной полосой, цвет белый
размер 8,0

LOT

Партія



АНАТОМИЧЕСКИЕ. Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Перед использованием необходимо стерильно удалить опудривающее вещество. Стерильно, апиrogenно, нетоксично.

PY № OT

«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH)

Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия)

Тел.: +49-30-639-78-825

Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ»

Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1

Тел.: +7-495-789-38-01

STERILE	EO
---------	----


Количество



(01)40889977710925(17)134568

Маркировка медицинского изделия включает в себя следующую информацию, представленную в таблице

Символы	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Партия
	Дата истечения срока годности
	Стерилизация Оксидом этилена
	Радиационная стерилизация

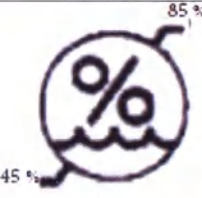	Защищать от воздействия влаги
	Верхний и нижний пределы температуры
	Верхний и нижний пределы влажности
	Беречь от солнечных лучей
	Знак CE-mark, соответствие продукции требованиям европейских регламентов
	Знак соответствия РСТ декларирования соответствия товаров
	Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке
	Не подлежит повторной стерилизации
	Не использовать повторно

Правила эксплуатации изделия

Недопустимо использование при нарушении целостности изделия.

При частом и длительном ношении рекомендуется соответствующий уход за кожей рук.

При появлении раздражений прекратить использовать перчатки и обратиться за консультацией к врачу.

Подготовка к работе изделия

1. Предварительно сделайте гигиеническую обработку рук, вымойте и протрите их.

2. Проверьте целостность упаковки. Полностью разорвите упаковку в месте спайки, не касаясь обертки.
3. Положите обертку на чистую сухую поверхность, не касаясь ее. Откройте упаковку, разверните обертку и держите ее открытой.
4. Большим и указательным пальцами осторожно возьмите изнутри отвернутый край манжеты перчатки.
5. Одним движением просуньте руку в перчатку, а отворот манжеты держите другой рукой на уровне запястья.
6. Проденьте пальцы под манжету второй перчатки и возьмите ее.
7. Одним движением наденьте вторую перчатку, избегая контакта с другими поверхностями.
8. После того как вы надели обе перчатки, при необходимости поправьте пальцы и межпальцевые места до комфортного прилегания перчаток.
9. Осторожно проденьте пальцы под отгиб манжеты второй перчатки и отогните манжету, убедитесь, что риск контакта с другими поверхностями исключен.
10. Руки в перчатках должны касаться исключительно стерильных изделий или предварительно продезинфицированных частей тела пациента.

Правила пользования

1. Используйте только ваш размер перчаток. Если перчатка плохо подходит, ее гораздо легче повредить (порвать или порезать), это также может повлиять на вашу способность работать.
2. Во время длительных операций периодически меняйте хирургические перчатки, т.к. защитный эффект перчаток снижается с течением времени, перчатки также могут легко порваться.
3. Нужно сравнительно коротко стричь ногти на руках (меньше 3 мм), чтобы снизить риск разрывов.
4. Чтобы защитить запястья, натяните перчатки поверх манжеты халата (если он надет).
5. Пользуйтесь водорастворимыми (нежиросодержащими) лосьонами и увлажняющими кремами для рук, чтобы защитить руки от сухости, образования трещин вследствие частого мытья рук и носки перчаток.
6. Не пользуйтесь маслосодержащими лосьонами и кремами для рук, т.к. они повреждают латексные хирургические.
7. Не храните перчатки в помещениях с крайними температурными показателями (например, на солнце, или возле отопительных приборов, кондиционера, при ультрафиолетовом освещении, флуоресцентном свете или рентгеновском аппарате). Эти условия могут повредить перчатки (вызвать разрушение материала), что значительно снизит их эффективность.

Правила снятия хирургических перчаток

1. Снимите первую перчатку, отгибая ее пальцами другой руки. Снимите перчатку, отгибая ее снаружи до второй фаланги (не снимайте полностью).
2. Снимите вторую перчатку, отгибая ее внешний край пальцами первой руки еще в перчатках.
3. Снимите перчатку, полностью выворачивая ее наизнанку, и убедитесь, что кожа медицинского работника контактирует только с внутренней поверхностью изделия.

Кратность

Однократного использования.

Срок годности

Перчатки стерилизованы и имеют гарантийный срок хранения 5 лет.

Меры предосторожности

Не использовать по истечении срока годности, указанного производителем.

Условия хранения, транспортировки, эксплуатации

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями стандартов и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от 0°C до +40°C, влажности 45% - 85%, атмосферном давлении 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Допускается транспортировка при минусовых температурах. Распаковывать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Хранить перчатки в сухом проветриваемом помещении в упакованном виде при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха 45% - 85%, атмосферном давлении 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.). Избегать воздействия горюче-смазочных материалов и растворителей, озона, прямых солнечных лучей, флуоресцентного освещения. Не подвергать нагреванию и воздействию влаги, а также находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Если температура хранения ниже +5°C, перчатки должны быть нагреты до +25-30°C перед эксплуатацией во избежание затруднений вследствие потери перчатками эластичности.

Условия эксплуатации: температура от +15°C до +40°C, влажность 45%-80%, атмосферное давление 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)

Утилизация

Обращение с отходами должно осуществляться соответственно с национальным законодательством. После применения не выбрасывать в окружающую среду. Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также с соответствующими местными, государственными и федеральными законодательными актами и согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класса Б.

Соответствие стандартам

Соответствует необходимым требованиям безопасности согласно Директиве ЕЭС 93/42/ЕЕС, DIN-EN 455/ASTM D-3577. Система менеджмента качества производителя соответствует ISO 13485.

Уполномоченный представитель производителя (организация для обращения потребителей РФ)

Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «ГАРАНТ» (ЗАО НПО «ГАРАНТ»),
129337, Москва, ул. Красная Сосна, д.30, стр.1, +7(495) 789-38-01, +7 (495) 789-38-02, +7(495) 745-05-56

789-38-

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

738. Неопуд
739. Неопуд
740. Неопуд
741. Неопуд
742. Неопуд
743. Неопуд
744. Неопуд
745. Неопуд
746. Неопуд
747. Неопуд
748. Неопуд
749. Неопуд
750. Неопуд
751. Неопуд
752. Неопуд
753. Неопуд
754. Неопуд
755. Неопуд
756. Неопуд
757. Неопуд
758. Неопуд
759. Неопуд
760. Неопуд
761. Неопуд
762. Неопуд
763. Неопуд
764. Неопуд
765. Неопуд
766. Неопуд
767. Неопуд
768. Неопуд
769. Неопуд
770. Неопуд
771. Неопуд
772. Неопуд
773. Неопуд
774. Неопуд
775. Неопуд
776. Неопуд
777. Неопуд
778. Неопуд
779. Неопуд
780. Неопуд
781. Неопуд
782. Неопуд
783. Неопуд
784. Неопуд
785. Неопуд
786. Неопуд
787. Неопуд
788. Неопуд
789. Неопуд
790. Неопуд
791. Неопуд
792. Неопуд
793. Неопуд
794. Неопуд
795. Неопуд
796. Неопуд
797. Неопуд
798. Неопуд
799. Неопуд
800. Неопуд
801. Неопуд
802. Неопуд
803. Неопуд
804. Неопуд
805. Неопуд
806. Неопуд
807. Неопуд

- ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- [illegible]

- [illegible]

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦРПИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- [illegible]

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

- [illegible]

-  ООО ЦПМИ  INFO@CPMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

-  **ООО ЦИРМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

Berlin, 25.06.2020

Vera Lindner

Vera Lindner

Urkundenrolle-Nr. 207/2020

Vorstehende, vor mir vollzogene Unterschrift der

**Frau Vera Lindner, geb. am 25.05.1961,
wohnhaft: Friedenstr. 6, 15713 Königs Wusterhausen OT Niederlehme,**

ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen Personaldokumentes mit Lichtbild, beglaubige ich
hiermit.

Der Notar fragte die Erschienene, ob er oder eine der mit ihm beruflich verbundenen Personen
in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beglaubigung ist, außerhalb des Notaramtes
tätig war oder ist. Die Frage wurde verneint.

Der Notar wies die Erschienene darauf hin, dass die Daten der Beteiligten in Übereinstimmung
mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Notar gespeichert und bearbeitet werden.

Berlin, 25.06.2020

Notar





Берлин, 25.06.2020

(подписано)

Вера Линднер

Номер в реестре нотариальных действий 207/2020

Настоящим я свидетельствую подлинность проставленной в моем присутствии подписи

г-жи Веры Линднер

дата рождения: 25.05.1961 г.

адрес места жительства: Фриденштрассе, д. 6, 15713 Кёнигс Вустерхаузен, ОТ Нидерлейме

подтвердившей свою личность при помощи действующего удостоверения личности с фотографией.

Нотариусом лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, был задан вопрос о том, не выступало ли ранее данное лицо или другие лица, связанные с ним в рамках профессиональной деятельности, в качестве, отличном от нотариуса, в отношении предмета настоящего нотариального действия, на что указанное лицо ответило отрицательно.

Нотариусом лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, было заверено, что данные участвующих сторон будут сохранены и обработаны в соответствии с правилами защиты данных у нотариуса.

Берлин, 25.06.2020 г.

(подписано)


Нотариус

[Гербовая печать: Нотариус г. Берлин * Ральф Траутманн]

[Тисненая гербовая печать: Нотариус г. Берлин * Ральф Траутманн]

Перевод выполнил переводчик

Торопыгина Ольга Вячеславовна

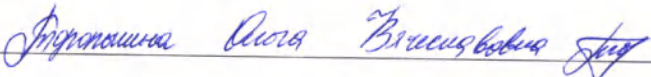

Российская Федерация

Город Москва.

Восьмого июля две тысячи двадцатого года.

Я, Жлобо Игорь Геннадьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Торопыгиной Ольги Вячеславовны.


Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/372-н/77-2020-2-2148

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

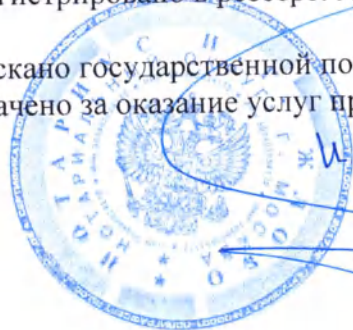

И.Г. Жлобо



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 34 (тридцать четыре) лист(-а, -ов)
Нотариус И.Г. Жлобо