


ACTIF / ACTIEF

Compeed®

Accélère l'élimination des cors
+ Acide salicylique

Helpt likdoorns sneller te verwijderen
+ Salicylzuur

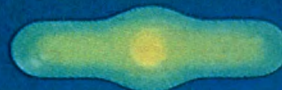

MOYEN FORMAT
MEDIUM

PANSEMENTS
CORS

LIKDOORN
PLEISTERS



Acide
Salicylique
Salicylzuur



Reste en
place
Blijft zitten



Pansements
Pleisters

Compeed®

55708991

FR La technologie hydrocolloïde COMPEED® est un gel actif constitué de particules qui améliorent l'hydratation. Combiné à l'acide salicylique, il aide à éliminer les cors.

Le pansement COMPEED® agit comme une seconde peau pour préserver l'hydratation naturelle de votre peau et pour :

- Protéger contre les frottements et atténuer la pression.
- Soulager immédiatement la douleur des cors.
- Hydrater et ramollir le cor, en permettant son élimination grâce à l'acide salicylique.

Reste en place 24 heures en moyenne. La durée peut varier en fonction des individus.

NL COMPEED® hydrocolloïd technologie is een actieve gel bestaande uit deeltjes die de hydratatie bevorderen. In combinatie met salicylzuur helpt het likdoorns te verwijderen.

COMPEED® pleister werkt als een tweede huid om de natuurlijke vochtbalans te ondersteunen, het:

- Beschermt en vormt een kussentje tegen wrijving en druk.
- Verzacht onmiddellijk de pijn ten gevolge van likdoorns.
- Houdt de likdoorn vochtig en zacht en maakt de verwijdering ervan gemakkelijker dankzij salicylzuur.

Blijft gemiddeld 24 uur zitten. De individuele ervaring kan variëren.



3 "574660"276879" >

CE
0459

ACTIF ACTIF
PANSEMENTS CORS | LIKDOORN PLEISTERS



Appliquez le pansement sur une peau propre et sèche. Évitez de toucher la partie adhésive du pansement. Laissez le pansement COMPEED® en place jusqu'à ce qu'il se décolle de lui-même. Après 48 heures au maximum, retirez le pansement. Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine. Lire les instructions et précautions à l'intérieur.

Maak voor gebruik de huid schoon en droog. Raak de kleefzijde niet aan. Laat de pleister zitten totdat hij vanzelf begint los te laten. Verwijder de pleister na maximaal 48 uur. Niet gebruiken wanneer u diabetes hebt of van een slechte bloedsomloop lijdt. Zie volledige gebruiksaanwijzing & waarschuwingen aan de binnenzijde.
Die Haut vor der Anwendung säubern und trocknen. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Pflasters. Das Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt sich von selbst zu lösen. Nach max. 48h, Pflaster entfernen. Produkt nicht benutzen, wenn Sie Diabetiker sind oder unter Durchblutungsstörungen leiden. Ausführliche Anwendungshinweise & Warnungen in der Innenkarte.

CE

0459 LOT: 1213C



2016/04

Manufacturer: Johnson & Johnson

Sante Beauté France SAS

F-51120 Sezanne

Made in EU

55708750



FR: Johnson & Johnson Santé Beauté France SAS - 1 rue Camille Desmoulins - 92130 Nanterre-Macdonald - France - Tel: 01 85 00 45 10 - AQL: 44-9 8557
BE: Johnson & Johnson Consumer SA/NV - Antwerpseweg 15-17
2340 Borsari, België - Belgique - Chw: 2331-529 - MADE IN EU - www.compeed.com

55708732

Rev. Date
09-2011

ACTIF / ACTIEF

Compeed®

Accélère l'élimination des cors
+ Acide salicylique

Helpt likdoorns sneller te verwijderen
+ Salicylzuur



PANSEMENTS
CORS LIKDOORN
PLEISTERS

CONSEILS D'UTILISATION:

1. Appliquez le pansement sur une peau propre et sèche. Assurez-vous que la peau soit exempte de crème ou d'huile.
2. Enlevez le papier protecteur en évitant de toucher la partie adhésive.
3. Appliquez le pansement en plaçant la pastille au centre du cor, en vous assurant que les bords soient bien aplatis.
4. Laissez le pansement en place jusqu'à ce qu'il se décolle de lui-même. Après 48 heures au maximum, retirez le pansement.
5. Immergez la zone concernée dans de l'eau chaude pendant 5 minutes avant d'enlever la peau morte.
6. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire jusqu'à 14 jours.



PRÉCAUTIONS:

- N'utilisez pas ce produit si vous êtes diabétique, allergique à l'acide salicylique ou tout autre composant de ce produit, ou souffrez d'une mauvaise circulation sanguine.
- Évitez l'exposition et l'enfant: utilisez seulement avec l'accord de votre médecin.
- Ne pas appliquer sur une peau irritée, infectée ou rouge.
- Si rougeurs ou suintements apparaissent, arrêtez le traitement immédiatement. Lavez la zone à l'eau et contactez votre médecin.
- Ne pas frictionner pour éviter les infections.
- Pour l'usage externe exclusivement.
- Évitez tout contact avec les yeux, les muqueuses ou autres parties.
- Conservez hors de la portée des enfants.
- Ne collez jamais un pansement COMPEED®.
- Les résidus d'adhésif sur les vêtements peuvent être nettoyés à l'eau d'essence de trèfle blanche (white spirit), en respectant les instructions de lavage.
- À conserver en dessous de 25°C.



А.П. Клеуко
ООО "Синтез &
Инженерные
технологии"
Депутат
Земельно-имущественного
дела
3 (мгн) 2014
и 2015
гг.