


Acknowledged as True and Correct
General Manager
Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
Han Xiujuan

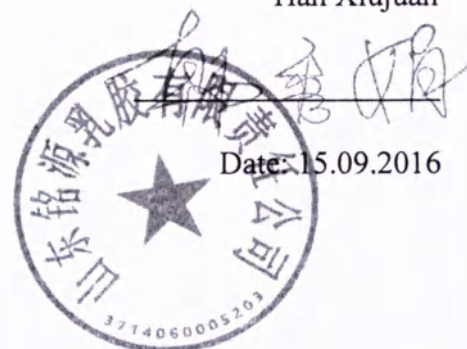

Natural latex Condoms R and J

Direction for use

Russian edition

2016

CONTENT

1.	INTENDED USE	3
2.	INDICATIONS	3
3.	CONTRAINDICATIONS	3
4.	PRECAUTIONS	3
5.	INTENDED APPLICATION	4
5.1.	GENERAL PROVISIONS	4
5.2.	PRE-STARTING PROCEDURES	4
5.3.	PROCEDURE OF WORK WITH DEVICE	4
6.	SPECIFICATIONS	6
7.	DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION	8
8.	TRANSPORTATION AND STORAGE	8
9.	PACKAGE CONTENTS	8
10.	MARKING	8
11.	MANUFACTURER WARRANTY	9
12.	MANUFACTURER INFORMATION	9
13.	RESPONSIBLE SUPPLIER	9

1. INTENDED USE

This Direction for use is applicable to natural latex condoms R and J (hereinafter referred to as condoms) for full cover of penis during sexual intercourse to prevent penetration of sperm into female genital tracts and/or to prevent sexually transmitted diseases

Domain of usage: general medical and preventing treatment facilities as well as home conditions.

Natural latex condoms R and J are manufactured in the following types: (see annex 1).

2. INDICATIONS:

- to prevent from unintended pregnancy;
- to prevent from HIV and STDs;
- occasional sexual intercourses and/or late reproductive age;
- temporary means of protection during break in use of intrauterine device or hormonal tablets.

3. CONTRAINDICATIONS:

This device is made of natural latex that may cause allergic reactions of some people. If you are allergic to latex, consult the doctor before using such condoms.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

Runny nose, itching, sneezing, dizziness, rough breathing; hypoesthesia or erectile dysfunction.

4. PRECAUTIONS:

- Only use a condom once.
- Store condoms in a cool dark place, away from direct sunlight.
- Don't use the condom if it's deformed, brittle or obviously damaged, if the external wrapper of condom is torn or individual pack is torn.
- This device contains silicon oil lubricant. If you want to use additional lubrication use the lubricant recommended for common use with condom. Avoid using oil-based lubricants like vaseline, baby oil, shower gel, massage oil, solid oil, oleomargarine and etc. that can easily damage latex condoms.
- Before any sexual contact, place the condom on the head of the erect penis, after that you may start sexual intercourse to avoid sexually transmitted diseases and unintended pregnancy.
- If sperm got into vagina immediately use emergency contraception.
- This device should be used before its expiration date
- Condom doesn't provide 100% protection from sexually transmitted diseases and unintended pregnancy.
- Use condoms of proper size and shape and be careful using it. While opening the foil avoid pricking condom with nails, jewellery not to damage it.
- Consult the doctor or pharmacist about medications you can use together with the condom.

5. INTENDED APPLICATION:

5.1 General provisions

Condoms are the only effective remedy at preventing pregnancy and HIV/AIDS and other sexually-transmitted infections, don't require engagement of highly experienced medical staff.

If the integrity of the condom is broken (e.g. if it is punctured, cut), toss the condom out and use a new one.

It is used as hygiene product for personal use to prevent sexually transmitted diseases and unintended pregnancy.

5.2 Pre-starting procedures:

5.2.1 Before condom using make sure of package integrity. In case of revealing of tear or holes, it is necessary to take a new condom.

5.3 Procedure of work with device:

5.3.1 Use a new condom before each sexual intercourse. While opening the package don't use sharp objects. Put a condom on prior to sexual intercourse

5.3.2 Method of application.



1. Open the package carefully so that there's less chance of ripping it: tear the package open from the serrated edge.



2. Place the condom on the head of the erect penis such that free space is on the top.



3. Pinching the tip of the condom, roll down the condom until it reaches the base of the penis.



4. Make sure that there is free space on the top and the condom isn't damaged.



5. After ejaculation and while the penis is still erect, pull the erect penis out holding onto the condom at the base of the penis.

5.3.3 Removal method



Remove the condom carefully, roll it in a paper tissue and throw it away in a bin.

6. SPECIFICATIONS

6.1. Condom sizes (fig. 1).

6.1.1. Condom length should be:

- length L1: ≥ 180 mm;
- length L2: ≥ 160 mm;
- length L3: 18 ± 2 mm.

6.1.2 Condom width W should be: 54 ± 2 mm.

6.1.3 Rim width V should be: $1,5 \pm 0,3$ mm.

6.1.4 Wall thickness C should be: $0,06 + 0,03 / - 0,01$ mm.

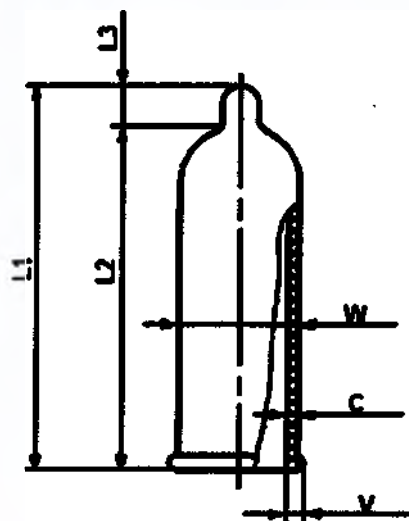


Figure 1 – Condom sizes.

6.2 Condom weight should be: $1,4 \pm 0,3$ g.

6.3 Physical and mechanical properties of the condom comply with the Table 1

Table 1

Property	Value	
	before heat ageing	after heat ageing
1. Strength condition under tension, MPa, (kgf/cm ²), not less	20(200)	17(170)
2. Elongation at break, %, not less	700	600

6.4 Condoms are manufactured from materials shown at Table 2.

Table 2 Materials (Raw materials), which have a contact with healthcare personnel and (or) patient

No	Name	Used material		Manufacturer
1	Natural latex condoms R and J 3 in 1 Elite Anatomic (contoured anatomic ribbed and dotted) - 3 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
2	Natural latex condoms R and J 3 in 1 Elite Anatomic (contoured anatomic ribbed and dotted) - 10 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
3	Natural latex condoms R and J Delicate (ribbed) - 3 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
4	Natural latex condoms R and J Delicate (ribbed) - 10 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	

5	Natural latex condoms R and J Natural Classic Thin (classic thin) -3 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
6	Natural latex condoms R and J Natural Classic Thin (classic thin) - 10 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
7	Natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) -3 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
8	Natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) - 10 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
9	Natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) -144 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
10	Natural latex condoms R and J ULTRA THIN (natural feels) -3 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	
11	Natural latex condoms R and J ULTRA THIN (natural feels) - 10 pcs./package;	Condom	see Annex 2	Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.
		Lubricant	Dimethicone (CAS No. 9016-00-6)*	

* - pharmacopoeial monograph [9016-00-6] according to RF State Pharmacopoeia.

6.5 Specific features of the device are the following:

- natural latex condoms R and J 3 in 1 Elite Anatomic (contoured anatomic ribbed and dotted) 3 pcs./package and 10 pcs./package are available in anatomic shape and have a texture (ribbed and dotted) , uncolored.




- natural latex condoms R and J Delicate (ribbed) 3 pcs./package and 10 pcs./package have a ribbed texture, uncolored.



- natural latex condoms R and J Natural Classic Thin (classic thin) 3 pcs./package and 10 pcs./package; natural latex condoms R and J ULTRA THIN (natural feels) 3 pcs./package and 10 pcs./package have thin walls, uncolored.



- natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) 3 pcs./package, 10 pcs./package and 144 pcs./package with high-lubricant, uncolored.

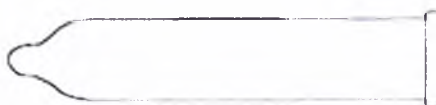

7. DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Condoms should be disposed in accordance with household waste disposal rules. Disposal should be carry out in accordance with local legislation current standards and requirements.

8. TRANSPORTATION AND STORAGE

8.1 The transportation of the condoms should be carry out by any means of transport in covered vehicles in accordance with rules of cargo transportation valid for this transport.

8.2 While transporting at sub-zero temperatures, condoms should be unpacked after holding at normal environmental conditions during 24 hours from receipt.

8.3 Condoms should be stored packed in closed warehouse room at a temperature 0 to 25°C and relative humidity not above 80% in the distance of no more than 1 m the heaters.

While storing condoms should be protected from direct sunlight, should not be impacted by vaseline, oils, organic solvents, petroleum product, carbolic acid, acids and alkalies.

9. PACKAGE CONTENTS

№	Description	Quantity, pc.
1	Natural latex condoms R and J *	1 package
2	Direction for use	1
3	Warranty	1

*- the customer can choose any condom type of a list of mentioned ones, see Annex 1

10. MARKING

The symbols used in marking.

- Lot No:



(number)

- " SINGLE USE ONLY "



- " Manufacturing date "



(year/month)

- " Best by ..."



(year/month)

- " The product is made of natural latex rubber, it may cause an allergy "



- CE marking



- " It is necessary to throw the used device into the special litter bins and containers."



- "Green Dot"



11. MANUFACTURER WARRANTY

The manufacturer guarantees compliance of the condoms to the national standards requirements if the operating, transportation and storage conditions are satisfied by a customer.

Guaranteed shelf-life of condoms – 5 years as from the date of production.

12. MANUFACTURER INFORMATION:

Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd., Middle Licheng Road, Development Zone of Linyi County 251500, Dezhou City, Shandong Province, China. Telephone: 86-156-0547-8830/86-534-2147767, E-MAIL: oemcondom@gmail.com.

13. RESPONSIBLE SUPPLIER:

Limited liability company GLOBUS-MARINE (GLOBUS-MARINE LLC), 10H/9, lit. A, 1/32, Ropshinskaya street, Saint Petersburg, Russian Federation, 197198. Telephone: +7(812)242 88 18.

ANNEX 1

I Natural latex condoms R and J, possible types:

1. Natural latex condoms R and J 3 in 1 Elite Anatomic (contoured anatomic ribbed and dotted)
-3 pcs./package;
2. Natural latex condoms R and J 3 in 1 Elite Anatomic (contoured anatomic ribbed and dotted)
- 10 pcs./package;
3. Natural latex condoms R and J Delicate (ribbed) -3 pcs./package;
4. Natural latex condoms R and J Delicate (ribbed) - 10 pcs./package;
5. Natural latex condoms R and J Natural Classic Thin (classic thin) -3 pcs./package;
6. Natural latex condoms R and J Natural Classic Thin (classic thin) - 10 pcs./package;
7. Natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) -3 pcs./package;
8. Natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) - 10 pcs./package;
9. Natural latex condoms R and J Tender (ultra soft) -144 pcs./package;
10. Natural latex condoms R and J ULTRA THIN (natural feels) -3 pcs./package;
11. Natural latex condoms R and J ULTRA THIN (natural feels) - 10 pcs./package.

ANNEX 2

Condom composition	Weight ratio, %
Natural rubber latex SVR-3L	97
Ground sulphur	0,8
PX	0,3
Zinc oxide	0,4
Antiager 264 (2,6- di-tert-butyl -4- methyl phenol)	1,0
Casein	0,5



ПОДТВЕРЖДАЮ
точность, достоверность
и правильность

Генеральный менеджер
Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд.
(Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
Хань Сюэцзюань (Han Xiujuan)

/подпись/

Печать: /Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. * 3714060005203/

Дата: 15.09.2016

Презервативы из натурального латекса R and J

Инструкция по применению

Русское издание

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	3
3.	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	3
4.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
5.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	4
5.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5.2.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИЗДЕЛИЕМ	4
5.3.	ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ	4
6.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
7.	УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8
8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	8
9.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
10.	МАРКИРОВКА	8
11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9
12.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	9
13.	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на презервативы из натурального латекса R and J (далее – презервативы), предназначенные для полного покрытия пениса во время полового акта, чтобы препятствовать доступу спермы к женским половым путям и/или предотвратить передачу инфекций половым путем.

Область применения: Лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а также домашние условия.

Презервативы из натурального латекса R and J изготавливаются в следующих исполнениях: (см. приложение 1).

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- исключение нежелательной беременности;
- предупреждение ВИЧ - инфекции и ЗППП;
- редкие половые сношения, или/и поздний репродуктивный возраст;
- временный способ предохранения во время паузы в применении внутриматочной спирали или гормональных таблеток.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Данный продукт изготовлен из натурального латекса, что может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, если у вас имеется аллергия на латекс, то перед использованием таких презервативов следует проконсультироваться у врача.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Насморк, зуд, чихание, головокружение, затрудненное дыхание; существенное снижение чувствительности или нарушение эрекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Презерватив одноразового использования.
- Хранить следует в темном сухом месте, защищённом от проникновения солнечных лучей.
- Не использовать презерватив, если он деформировался, стал хрупким или есть очевидные повреждения, испорчена внешняя оболочка презерватива или имеются повреждения индивидуальной упаковки.
- В данном продукте уже использована смазка, если хотите воспользоваться дополнительной смазкой, то используйте рекомендованную для совместного применения с презервативом. Запрещено использовать смазки на основе нефтяного масла такие, как вазелин, детские мази, гель для душа, массажное масло, солидол, олеомаргарин и т.д., которые могут легко нарушить целостность презерватива.
- Презерватив надевают на пенис при достаточной эрекции перед тем, как входить в соприкосновение с телом партнёра, надев презерватив, можно начинать половой акт, во избежание передачи венерических заболеваний и наступления беременности.
- Если вы обнаружите, что сперма попала во влагалище, то немедленно воспользуйтесь экстренной контрацепцией.
- Данный продукт следует использовать в течение его срока действия.
- Презерватив не на 100% исключает возможность забеременеть и избежать венерические заболевания.
- Используйте подходящий по форме и размерам презерватив, проявляйте осторожность при обращении с ним, вытаскивая его из упаковки, старайтесь не зацепить ногтями, ювелирными украшениями, чтобы избежать повреждения целостности презерватива.
- Следует проконсультироваться у врача или фармацевта об лекарственных средствах, которыми можно пользоваться совместно с презервативом.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:

5.1 Общие положения

Презервативы являются единственным эффективным средством, позволяющим предотвратить беременность и заражения ВИЧ/СПИДом и другими инфекциями, передающихся половым путем, не требуется привлечение квалифицированного медицинского персонала.

Если целостность упаковки презерватива нарушена (например, если она проколота, надрезана), ее следует заменить на новую, а старую упаковку выбросить.

Применяются как гигиеническое средство индивидуального назначения для профилактики венерических заболеваний и нежелательной беременности.

5.2 Подготовка к работе с изделием:

5.2.1 Перед использованием презерватива необходимо убедиться в целостности упаковки. В случае обнаружения, надрывов или отверстий следует взять новый презерватив.

5.3 Порядок работы с изделием:

5.3.1 Пользуйтесь новым презервативом перед каждым половым актом. При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы. Надевайте презерватив перед началом полового акта.

5.3.2 Способ применения презерватива.




1. Аккуратно извлеките презерватив из упаковки, избегая повреждения, надорвав упаковку со стороны зубчатой кромки.



2. Наденьте презерватив на верхнюю часть возбужденного полового члена, оставив свободное пространство на конце.



3. Разверните презерватив до основания полового члена, придерживая его за накопитель.

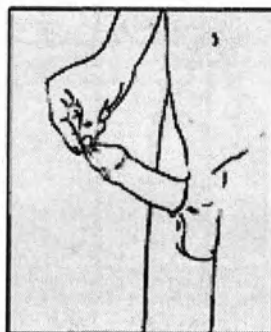

4. Убедитесь, что на конце презерватива есть свободное пространство и презерватив не поврежден.



5. После эякуляции и пока пенис все еще возбужден, освободите эрегированный член, крепко придерживая презерватив у основания члена.

5.3.3 Снятие презерватива



Аккуратно снимите презерватив, заверните его в бумажную салфетку и выбросьте в мусорный ящик.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Размеры презерватива (рис. 1).

6.1.1. Длина презерватива должна быть:

- длина L_1 : ≥ 180 мм;
- длина L_2 : ≥ 160 мм;
- длина L_3 : 18 ± 2 мм.

6.1.2 Ширина презерватива W должна быть: 54 ± 2 мм.

6.1.3 Толщина венчика V должна быть: $1,5 \pm 0,3$ мм.

6.1.4 Толщина стенки C должна быть: $0,06 + 0,03 / - 0,01$ мм.

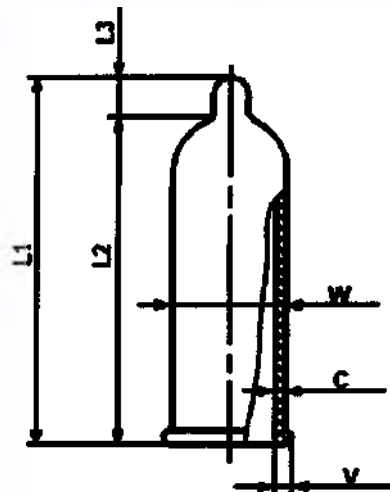


Рисунок 1 – Размеры презерватива.

6.2 Масса презерватива должна быть: $1,4 \pm 0,3$ г.

6.3 Физико-механические показатели презерватива соответствуют таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя	
	до теплового старения	после теплового старения
1. Условия прочности при растяжении, МПа (кгс/см^2), не менее	20(200)	17(170)
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700	600

6.4 Презервативы изготавливаются из материалов, приведенных в таблице 2.

Таблица №2 Материалы (сырье), контактируемые с медперсоналом и (или) пациентом

№	Наименование	Используемый материал		Производитель
1	Презервативы из натурального латекса R and J 3 in 1 Elite Anatomic (контурные анатомические ребристые с пупырышками) - 3 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
2	Презервативы из натурального латекса R and J 3 in 1 Elite Anatomic (контурные анатомические ребристые с пупырышками) - 10 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
3	Презервативы из натурального латекса R and J Delicate (ребристые) - 3 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
4	Презервативы из натурального латекса R and J Delicate (ребристые) - 10 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	

5	Презервативы из натурального латекса R and J Natural Classic Thin (классические тонкие) - 3 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
6	Презервативы из натурального латекса R and J Natural Classic Thin (классические тонкие) - 10 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
7	Презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) - 3 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
8	Презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) - 10 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
9	Презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) - 144 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
10	Презервативы из натурального латекса R and J ULTRA THIN (натуральные чувства) - 3 шт./уп.;	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	
11	Презервативы из натурального латекса R and J ULTRA THIN (натуральные чувства) - 10 шт./уп	Презерватив	см. Приложение 2	Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.)
		Смазка	Диметикон (CAS номер: 9016-00-6)*	

* - фармакопейная статья [9016-00-6] согласно Государственной Фармакопеи РФ

6.5 Изделие имеет следующие специфические особенности:

- презервативы из натурального латекса R and J 3 in 1 Elite Anatomic (контурные анатомические ребристые с пупырышками) 3 шт./уп. и 10 шт./уп. выпускаются анатомической формы и имеют текстуру (ребристая с пупырышками), бесцветные.




- презервативы из натурального латекса R and J Delicate (ребристые) 3 шт./уп. и 10 шт./уп. имеют ребристую текстуру, бесцветные.



- презервативы из натурального латекса R and J Natural Classic Thin (классические тонкие) 3 шт./уп. и 10 шт./уп.; Презервативы из натурального латекса R and J ULTRA THIN (натуральные чувства) 3 шт./уп. и 10 шт./уп. имеют утонченные стенки, бесцветные.



- презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) 3 шт./уп., 10 шт./уп. и 144 шт./уп. имеют повышенное содержание смазки, бесцветные.

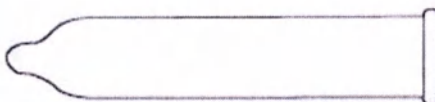

7. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Презервативы должны быть утилизированы в соответствии с правилами утилизации бытовых отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующего законодательства.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Презервативы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.2 При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течении 24 часов с момента получения при нормальных климатических условиях.

8.3 Презервативы хранят в упакованном виде в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Презервативы из натурального латекса R and J *	1 упаковка
2	Инструкция по применению	1
3	Гарантийный талон	1

* - исполнение выбирается Заказчиком из числа представленных, см. Приложение 1.

10. МАРКИРОВКА

Символы, применяемые при маркировке.

- номер партии:



(номер)

- "ОДНОРАЗОВЫЕ"



- "Дата изготовления"



(год/месяц)

- "Использовать до..."



(год/месяц)

- "Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию".



- CE маркировка



- "Необходимость выбрасывать использованное изделие в специальную емкость – урны и контейнеры "



- "Зеленая точка"



11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие презервативов требованиям национальных стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения презервативов – 5 лет со дня изготовления.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. (Shandong Ming Yuan Latex Co., Ltd.), Миддл Личенг Роуд, Зона промышленного развития уезда Линьи, 251500, г. Дэчжоу, провинция Шаньдун, Китай (Middle Licheng Road, Development Zone of Linyi County 251500, Dezhou City, Shandong Province, China). Телефон 86-156-0547-8830/86-534-2147767, E-MAIL: oemcondom@gmail.com.

13. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-МАРИН» (ООО «ГЛОБУС-МАРИН»), 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом. 10Н/9. Телефон +7 (812) 242 88 18.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

I Презервативы из натурального латекса R and J, варианты исполнений:

1. Презервативы из натурального латекса R and J 3 in 1 Elite Anatomic (контурные анатомические ребристые с пупырышками) -3 шт./уп.;
2. Презервативы из натурального латекса R and J 3 in 1 Elite Anatomic (контурные анатомические ребристые с пупырышками)- 10 шт./уп.;
3. Презервативы из натурального латекса R and J Delicate (ребристые) -3 шт./уп.;
4. Презервативы из натурального латекса R and J Delicate (ребристые) - 10 шт./уп.;
5. Презервативы из натурального латекса R and J Natural Classic Thin (классические тонкие) -3 шт./уп.;
6. Презервативы из натурального латекса R and J Natural Classic Thin (классические тонкие) - 10 шт./уп.;
7. Презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) -3 шт./уп.;
8. Презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) - 10 шт./уп.;
9. Презервативы из натурального латекса R and J Tender (ультрамягкие) -144 шт./уп.;
10. Презервативы из натурального латекса R and J ULTRA THIN (натуральные чувства) - 3 шт./уп.;
11. Презервативы из натурального латекса R and J ULTRA THIN (натуральные чувства) - 10 шт./уп.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состав презерватива	Массовых долей, %
Натуральный каучуковый латекс SVR-3L	97
Молотая сера	0,8
РХ пара-ксилол	0,3
Окись цинка	0,4
Вещество, предупреждающее старение 264 (2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол)	1,0
Казеин	0,5

Прошито:
Печать: /Шаньдун Минг Юан Латекс Ко., Лтд. * 3714060005203/

-----Конец перевода документа-----

Перевод с китайского и английского языков на русский язык выполнен переводчиком Оранской Анастасией Юрьевной. Подтверждаю, что выполненный мной перевод является правильным, точным и полным.

САНКТ-

Оранская Анастасия Юрьевна Оранск

ПЕТЕРБУРГ

Российская Федерация.


Десятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Любавина Елена Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Санкт-Петербурга Розовой Марины Юрьевны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Оранской Анастасией Юрьевной в моём присутствии. Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № Т-4134

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Вр.и.о. нотариуса

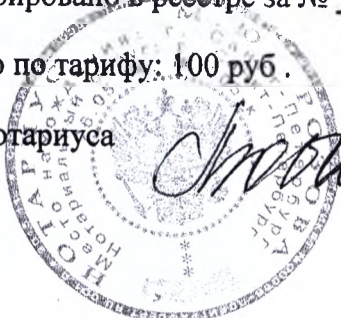

Любавина Е.А.



Итого в настоящем документе

23 (двадцать три) листа

Вр.и.о. нотариуса

Любавина Е.А.

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ

Российская Федерация, город Санкт-Петербург, десятого ноября две тысячи шестнадцатого года

Я, Любавина Елена Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Санкт-Петербурга Розовой Марины Юрьевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за N Т-4136

Взыскано по тарифу : 250 руб.

Вр.и.о. нотариуса



Любавина Е.А.



Итого в настоящем документе

25 (двадцать пять) листов

Вр.и.о. нотариуса

Любавина Е.А.