


22
КОПИЯ



BE IT KNOWN that I, Sunita Kumeri of, 268 Bath Road, Slough, Berkshire United Kingdom a duly authorised Notary Public

CERTIFY ONLY that Brian Michael Howes who is well known to me and who is duly authorised by Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd ("the Company") to represent them in this matter has today caused the annexed Maintenance Documentation of the Medical Device Durex® Invisible Stimulation Natural Rubber Latex Condoms to be produced to me and has represented to me on behalf of the company that the said document is a true copy of the original electronic document produced to him.

SIGNED and sealed at 268 Bath Road, Slough, Berkshire aforesaid on 16th July 2020.

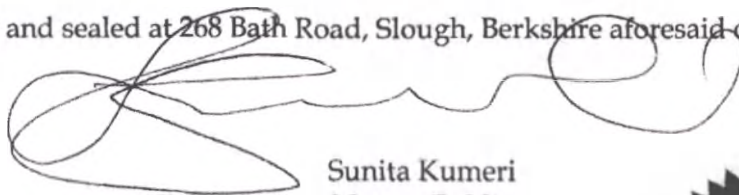

Sunita Kumeri
Notary Public
England and Wales

Protocol No. 1/20



Approved by:

Andrew Brownhill

Andrew Brownhill (Jun 11, 2020 13:58 GMT+1;

Andrew Brownhill

Global Regulatory Affairs Manager

Date: Jun 11, 2020

MAINTENANCE DOCUMENTATION OF THE MEDICAL DEVICE

Durex® Invisible Stimulation natural rubber latex condoms

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., UK

NAME OF THE MEDICAL DEVICE

Durex Invisible Stimulation natural rubber latex condoms

MANUFACTURER

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.

Registered address: 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK.

Phone: +44 (0) 1482 582438

MANUFACTURING SITE

Qingdao London Durex Co Ltd., No 1-13 Shangma Part, Aodong Road, High-tech Industrial Development Zone, Qingdao City, Shandong Province, P. R. China.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER

Reckitt Benckiser Healthcare LLC, Floor 3, 4 Shlyuzavaya emb., Moscow, 115114, Russia.

Phone: +7 (495) 961 2565; Fax: +7 (495) 961 2566.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE

Condoms are used as a barrier contraception to prevent unwanted pregnancy and to protect against HIV and other sexually transmitted diseases.

POTENTIAL CONSUMERS OF THE MEDICAL DEVICE

Medical Device is intended to be used by laypersons. Not for clinical use.

MEDICAL DEVICE OVERVIEW (DESCRIPTION)

The condoms are manufactured from natural latex, smooth, colourless, straight-walled.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Durex Invisible Stimulation	
Technical parameter	Specification
Condom length, mm	180 ± 10
Condom width, mm (measured at 30 mm from the bead)	52 ± 2
Teat length, mm	16 ± 7
Thickness, mm	0.043 - 0.052
Bead thickness, mm	1-2
Condom weight (after removed from the primary package), g	1.20 ± 0.5
Condom weight in primary package, g	2.0 ± 0.5
Elongation, %	Min 700

Durex Invisible Stimulation	
Technical parameter	Specification
Elongation, % (aged)	Min 600
Freedom from holes	Impermeable
Tensile strength, mPa	Min 20
Tensile strength, mPa (aged)	Min 17

LABELLING INFORMATION

Each individual package is labelled with:

- trademark;
- lot number (LOT);
- shelf life formatted as "Expiry date (EXP)".

Symbols used for labelling and what they mean:

	Use by/Expiry date
	Lot number

Additional information can be printed on the individual package including reference to international standards.

The following information is applied to the outer surface of the secondary/ consumer package:

- condom description (surface, colour, form, with teat/without teat);
- number of condoms in consumer package;
- nominal condom length;
- nominal condom width;
- indication if condom contains/does not contain lubricant;
- indication if the lubricant contains/does not contain spermicide;
- storage guidelines;
- name and address of the manufacturer;
- country of origin (if applicable);
- shelf life formatted as "Expiry date (EXP)".

Additional information can be printed on the outer surface of the secondary/ consumer package including reference to international standards.

Outer or inner surface of consumer packages and/or package insert contains prescribing information, which includes:

- reminder to handle the condoms carefully, including when removing them out of the package;
- indications, contraindications, precautions for use, possible side effects;
- method of application;
- necessity to remove condom right after sexual intercourse;
- necessity to exclude petroleum- and oil-based lubricants;
- necessity to use safe additional lubricant if needed;
- necessity to consult a specialist on compatibility with topical medications;

- disposal instructions for used condoms.

INDICATIONS

- prevention of unwanted pregnancy;
- protection from HIV and other sexually transmitted diseases.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergy to any of the components in condom composition.

Not suitable for anal sex.

PRECAUTIONS FOR USE

Put a condom on before the penis touches the other person. This helps to prevent pregnancy and the possibility of catching sexually transmitted infections. Check the expiry date on the condom wrapper before you use it. If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an undamaged package.

Use the lubricant recommended for use with condoms. Petroleum- and oil-based lubricants (petroleum jelly, baby oil and some pessaries) and some topical medicines that are applied to the penis or vagina can damage condoms.

Stop use if you feel discomfort or irritation while using the condom.

Consult a specialist if:

- about the compatibility of condoms with other contraceptives;
- you are using topical medicines applied to penis or vagina;
- irritation/discomfort persists after use;
- you are unsure if you are allergic to latex;
- a condom leaks or bursts during use (do this as soon as possible and within 72 hours).

If it is necessary use additional lubrication on the outside of the condom.

If you use a condom for oral sex first, you should use a new condom for any other type of sex that follows.

Use a condom only once. Reuse may increase risk of failure or infection.

None of the contraception methods can guarantee 100% protection against unwanted pregnancy, HIV and other sexually transmitted diseases.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

Condoms are made of natural rubber latex, which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if user is allergic to latex.

APPLICATION

Tear the package at the toothed edge and handle the condom carefully as it can be damaged by fingernails and sharp objects.

Make sure that the condom is not inside out. Having squeezed the teat place the condom on the top of the erect penis. Roll down to its base. Stop and check if you feel the condom slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage.

Soon after ejaculation pull the penis out holding the condom firmly at the base of the penis and carefully take the condom off.

Dispose in a bin. Do not flush the condom down the toilet.

TRANSPORTATION

There are no specific conditions of transportation.

EXPLOITATION CONDITONS

There are no specific conditions required when the medical device is used for its purpose and as indicated in the labelling.

MEDICINAL OR PHARMACEUTICAL SUBSTANCE CONTAINED IN THE MEDICAL DEVICE

Not applicable.

LIST OF MATERIALS OF ANIMAL AND (OR) HUMAN ORIGIN

Compounded natural rubber latex contains casein (0,0152% of the contents of it, functions as a stabilizer) that is considered as a derivative from tissue/materials of animal origin as it is extracted from milk.

Casein (milk protein) is a natural by-product of milk. It has no known toxic effects although it may cause a reaction in individuals with an allergy to milk. The exposure from the condoms is considered not to pose any additional risk to users of the condoms.

The device does not contain any human blood derivatives.

STERILIZATION

The medical device is presented as a non-sterile device and is not intended to be sterilized thereafter.

USAGE WITH OTHER MEDICAL DEVICES

Condoms can be used on their own to prevent from STIs and pregnancy and aren't intended to be used in conjunction with other medical devices.

However, consumers can use condoms with condom compatible lubricants if needed.

INSTALLATION, MAINTENANCE, CALIBRATION

Not applicable.

CLEANING, DISINFECTION, STERILISATION OF THE MEDICAL DEVICE

Not applicable.

INTERNATIONAL STANDARDS

ISO 13485

ISO 14971

ISO 4074

PRECAUTIONS TO BE TAKEN BY USER RELATED TO THE DISPOSAL OF THE DEVICE

Durex Invisible Stimulation natural rubber latex condoms should be disposed in a bin. The condoms should not be flushed down the toilet.

DATE OF THE ISSUE / THE LATEST REVISION OF THE MAINTENANCE DOCUMENTATION

The medical device includes an indication of the latest revision within the instruction for use.

GUIDELIENSS FOR DESTRUCTION AND DISPOSAL

The devices should be used in accordance with the instructions for use.

In household use, the product is disposed of as household waste. Do not put it down the drain.

In all other cases, the condoms are disposed of in accordance with local requirements.

Approved by:
Andrew

ENVIRONMENT SAFETY REQUIREMENTS

With proper usage, storage and disposal Durex® condoms have no negative impact on the environment.

Approved by:

Andrew Brownhill

Andrew Brownhill (Jun 11, 2020 13:58 GMT+1)

Andrew Brownhill

Global Regulatory Affairs Manager

Date: Jun 11, 2020

Signature:

INSTRUCTION for CONSUMERS

Durex® Invisible Stimulation natural rubber latex condoms

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., UK



Read the instruction carefully before use, especially if condoms are used for oral or anal sex.

Put a condom on before the penis touches the other person. This helps to prevent pregnancy and the possibility of catching sexually transmitted infections.

ATTENTION: Check the expiry date on the condom wrapper before you use it. If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an undamaged package.

PURPOSE/ INDICATIONS

Condoms are used as a barrier contraception to prevent unwanted pregnancy and to protect against HIV and other sexually transmitted diseases.

APPLICATION

1. Tear the package at the toothed edge and handle the condom carefully as it can be damaged by fingernails and sharp objects.
2. Make sure that the condom is not inside out. Having squeezed the teat place the condom on the top of the erect penis.
3. Roll down to its base. Stop and check if you feel the condom slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage.
Soon after ejaculation pull the penis out holding the condom firmly at the base of the penis and carefully take the condom off.
4. Dispose in a bin. Do not flush the condom down the toilet.

If it is necessary use additional lubrication on the outside of the condom.

If you use a condom for oral sex first, you should use a new condom for any other type of sex that follows.

Use a condom only once. Reuse may increase risk of failure or infection.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergy to any of the components in condom composition.

Not suitable for anal sex.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

Condoms are made of natural rubber latex, which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if user is allergic to latex.

PRECAUTIONS FOR USE

Use the lubricant recommended for use with condoms. Petroleum- and oil-based lubricants (petroleum jelly, baby oil), some pessaries and some topical medicines that are applied to the penis or vagina can damage condoms.

Stop use if you feel discomfort or irritation while using the condom.

Consult a specialist if:

- about the compatibility of condoms with other contraceptives
- you are using topical medicines applied to penis or vagina;
- irritation/discomfort persists after use;
- you are unsure if you are allergic to latex;
- a condom leaks or bursts during use (do this as soon as possible and within 72 hours).

None of the contraception methods can guarantee 100% protection against unwanted pregnancy, HIV and other sexually transmitted diseases.

STORAGE AND SHELF LIFE *(could be printed in the secondary/ consumer package)*

Store the product in a dry place at 0-25 °C. Avoid direct sunlight.

Shelf life - 5 years.

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS *(could be printed in the secondary/ consumer package)*

Nominal sizes: length – 180 mm, width – 52 mm;

Description: straight-walled, teat-ended, smooth, colourless, made of natural latex, with silicone lube containing stimulating agent, extra thin.

Date of the latest revision of the instruction:

<Резная печать нотариуса>

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮ, что я, Сунита Кумери (Sunita Kumeri), офис расположен по адресу: Соединенное Королевство, Беркшир, Слау, Бат Роуд 268, являясь уполномоченным должным образом нотариусом,

УДОСТОВЕРЯЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тот факт, что Брайан Майкл Хоуз (Briam Michael Howes), личность которого мною удостоверена, должным образом уполномоченный компанией «Рекитт Бенкизер Хелскзар (ЮК) Лимитед» («Компания») представлять ее по данному вопросу, сегодня предъявил мне прилагаемую Эксплуатационную документацию на медицинское изделие «Презервативы из натурального латекса Durex® Invisible Stimulation» и заявил от лица Компании, что указанный документ является точной копией оригинального электронного документа, представленного ему.

ПОДПИСАНО и скреплено печатью по адресу: Бат Роуд 268, Слау, Беркшир, 16 июля 2020 г.

/Подпись/
Сунита Кумери
Государственный нотариус
Англии и Уэльса

Протокол № 1/20

Одобрено:

/подпись/

Эндрю Браунхилл (Andrew Brownhill)

Менеджер по регистрации – глобальный отдел

Дата: 11 июня 2020 г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Презервативы из натурального латекса
Durex® Invisible Stimulation**

Рекитт Бенкизер Хелскэар (ЮК) Лтд., Соединенное Королевство

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Презервативы из натурального латекса Durex Invisible Stimulation

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

“Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.”, 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство.

Тел.: +44 (0) 1482 582438

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

“Циндао Лондон Дюрекс Ко Лтд.”, № 1-13 Шанма Парт, Аодонг Роуд, Хай-тек Индастриал Девелопмент Зоун, Циндао Сити, провинция Шаньдун, Китай.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО “Рекитт Бенкизер Хэлскэр”, Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Тел.: +7 (495) 961 25 65; Факс: +7 (495) 961 25 66

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие предназначено для использования непрофессионалами. Не для клинического применения.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, гладкие, бесцветные, прямой формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Durex Invisible Stimulation	
Технический параметр	Спецификация
Длина презерватива, мм	180 ± 10
Ширина презерватива, мм (измеряется в 30 мм от венчика)	52 ± 2
Длина накопителя, мм	16 ± 7
Толщина, мм	0.043 – 0.052
Толщина венчика, мм	1-2
Масса презерватива (после извлечения из первичной упаковки), г	1.20 ± 0.5
Масса презерватива в первичной упаковке, г	2.0 ± 0.5
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 700
Относительное	Не менее 600

Durex Invisible Stimulation	
Технический параметр	Спецификация
удлинение при разрыве, % (после старения)	
Герметичность	Герметичен
Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 20
Условная прочность при растяжении, МПа (после старения)	Не менее 17

МАРКИРОВКА

На каждой индивидуальной упаковке напечатана следующая информация:

- торговая марка;
- номер серии (LOT);
- срок годности в формате "Годен до/ Использовать до (EXP)".

Символы, используемые для маркировки, и их обозначение:

	Годен до/ Использовать до
	Номер серии

Дополнительная информация может быть напечатана на индивидуальной упаковке, включая ссылки на международные стандарты.

На внешней стороне вторичной/потребительской упаковки напечатана следующая информация:

- описание презерватива (поверхность, цвет, форма, с накопителем/ без накопителя);
- количество презервативов в потребительской упаковке;
- номинальная длина презерватива;
- номинальная ширина презерватива;
- указание о том, что презерватив в смазке/ без смазки;
- указание о том, что смазка содержит/не содержит спермицид;
- указания по хранению;
- наименование и адрес производителя;
- страна происхождения/места производства (если применимо);
- срок годности в формате "Годен до/ Использовать до (EXP)".

Дополнительная информация может быть напечатана на внешнюю сторону вторичной/потребительской упаковки, включая ссылки на международные стандарты.

Внешняя или внутренняя сторона вторичной/потребительской упаковки и/или вкладыш содержат следующую информацию:

- напоминание о необходимости аккуратного обращения с презервативом, включая его извлечение из упаковки;
- показания, противопоказания, меры предосторожности, возможные побочные эффекты
- способ применения;
- необходимость удаления презерватива сразу после сексуального контакта;
- необходимость исключения смазок нефтяного происхождения и на масляной основе;
- необходимость использования безопасной дополнительной смазки, если это требуется;

- необходимость консультации со специалистом по вопросу совместимости презерватива с лекарственными средствами местного применения;
- инструкцию по утилизации использованных презервативов.

ПОКАЗАНИЯ

- предотвращение нежелательной беременности;
- защита от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

Не подходит для анального секса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем. Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

В случае необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или иных заболеваний, передающихся половым путем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель надеть презерватив на головку эрегированного пениса. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжимания пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Особых условий транспортировки не требуется.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании медицинского изделия согласно его назначению и инструкции по применению не требуется никаких особых условий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Срок годности - 5 лет.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Не применимо.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Составной натуральный латекс содержит казеин (0,0152% от его содержания, выполняет функцию стабилизатора), который может рассматриваться как производное от тканей/ материалов животного происхождения, т.к. выделяется из молока.

Казеин (молочный белок) является натуральным субпродуктом молока. Он не имеет никакого известного токсического воздействия, хотя он может вызвать реакцию у людей с аллергией на молоко. Считается, что воздействие презервативов не создает никакого дополнительного риска для пользователей презервативов.

Изделие не содержит производных человеческой крови.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Медицинское изделие является нестерильным изделием и не предназначено для последующей стерилизации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Для предотвращения инфекций, передающихся половым путем, и беременности презервативы могут использоваться как самостоятельное медицинское изделие и не предназначены для использования в сочетании с другими медицинскими изделиями.

Однако в случае необходимости потребители могут использовать презервативы в сочетании со смазками/ лубрикантами, которые совместимы с презервативами.

УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КАЛИБРОВКА

Не применимо

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Не применимо.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

ISO 13485

ISO 14971

ISO 4074

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Презервативы из натурального латекса Durex Invisible Stimulation следует выбрасывать в мусорное ведро. Не следует спускать презервативы в унитаз.

ДАТА ВЫПУСКА/ ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕСМОТР ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Медицинское изделие содержит информацию о последнем пересмотре/ последней редакции инструкции по применению.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

При бытовом использовании изделие утилизируется как бытовые отходы. Не выбрасывать в канализацию.

В других случаях утилизация презервативов выполняется в соответствии с местными нормами.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При правильной эксплуатации, хранении и утилизации презервативы марки Durex® не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Одобрено:

/подпись/

Эндрю Браунхилл (Andrew Brownhill)

Менеджер по регистрации – глобальный отдел

Дата: 11 июня 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Презервативы из натурального латекса Durex® Invisible Stimulation

Рекитт Бенкизер Хелскэар (ЮК) Лтд., Соединенное Королевство

1.  2.  3.  4. 

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжатия пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

В случае необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

Не подходит для анального секса.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые

пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ *(может быть напечатано на вторичной/потребительской упаковке)*

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Срок годности - 5 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *(может быть напечатано на вторичной/потребительской упаковке)*

Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 52 мм;

Описание: прямой формы, с накопителем, гладкие, бесцветные, из натурального латекса, с силиконовой смазкой, содержащей стимулирующее вещество, ультратонкие.

Дата последней редакции инструкции:

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Марычевым Юрием Игоревичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого июля две тысячи двадцатого года.

Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Марычева Юрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2020- *45 5265*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.

ПОДПИСЬ

Е.Д. Ребрина

**Гербовая печать
нотариуса города Москвы Акимов Г.Б
ИНН 770400047587***



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 16 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого июля две тысячи двадцатого года.

Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2020- *45 5266*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 210 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1050 руб.



Е.Д. Ребрина

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 10 лист(а)(ов)
ВРИО нотариуса