

Согласовано/APPROVAL

MADISON ORTHO INC./МЭДИСОН ОРТО ИНК

Организация/Organization


1660 Calle Santa Ana, San Juan, Puerto Rico-00909/

1660 улица Санта-Ана, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико-00909

Адрес/Address

President MADISON ORTHO IN. /Президент МЭДИСОН ОРТО ИНК

Должность/Occupation

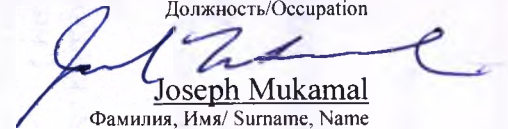
Joseph Mukamal

Фамилия, Имя/ Surname, Name

Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY


Подпись/Signature

Инструкция по эксплуатации Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho

Instruction for use Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho

Received by JOSEPH MUKAMAL, President of MADISON ORTHO INC.,
Whom I know personally.
IN SAN JUAN, Puerto Rico, this 30th June 2020



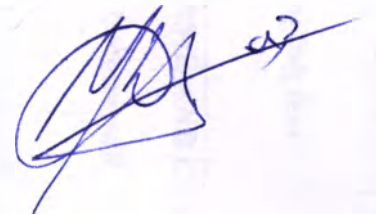

Russian text	English text
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ) И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ Наименование МИ, варианты исполнения МИ Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho: 1. Пластина фиксирующая: 1.1. ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-7 с шагом 1 1.2. для стабилизации вертела, под динамический бедренный винт, JZQ 07, отверстия 4 1.3. дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 1.4. восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1, 12-22 с шагом 2 1.5. симфизарная YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстия: 4, 6 1.6. пяточная, JZQ 06, правая/ левая, 3,5 мм, размер: сверх малая, малая, крупная, сверх крупная, длина: 64 мм, 69 мм, 76 мм, 81 мм 1.7. ладьевидной кости JZQ 07, размер 2,7 мм, отверстия: 11, длина 63 мм 1.8. кубовидной кости JZQ 06, правая/ левая размер 2,7 мм, отверстия: 11 1.9. таранной кости YSQ 20, размер 2,7 мм, отверстия: 6, длина 44 мм 1.10. с 2 отверстиями ZEQ 02, размер 2,7 мм, отверстия: 2, длина 20 мм 1.11. для заднего и среднего отдела стопы, JZQ 02, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 5x31 мм, 8x45 мм 1.12. переходная ZEQ 03, размер 1,5 мм отверстия: 6, 12 1.13. переходная ZEQ 03, размер 1,3 мм, прямая, отверстия: 6, 12 1.14. опорная JZQ 06 правая/ левая. размер 1,3/1,5 мм, наклонная угловая, отверстий 8 1.15. детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 4-10 с шагом 1	MEDICAL DEVICE (MD) NAME AND CLASSIFICATION MD name, variations of MD Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho: 1. Plate Locking: 1.1. Clavicle with Hook JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-7 increments 1 1.2. Trochanter Stabilizing, for DHS, JZQ 07, Holes 4 1.3. Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 1.4. Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 5-10 increments 1, 12-22 increments 2 1.5. Symphyseal YSQ 20, size 3.5 mm, holes: 4, 6 1.6. Calcaneal, JZQ 06, right/left, 3.5 mm size: extra small, small, large, extra large, length: 64 mm, 69 mm, 76 mm, 81 mm 1.7. Navicular JZQ 07, size 2.7 mm, holes: 11, length: 63 mm 1.8. Cuboid JZQ 06, right/left, size 2.7 mm, holes: 11 1.9. Talus YSQ 20, size 2.7 mm, holes: 6, length: 44 mm 1.10. with 2 Holes ZEQ 02, size 2.7 mm, holes: 2, length: 20 mm 1.11. Hind and Midfoot JZQ 02, size 2.7 mm, holes x length: 5x31 mm, 8x45 mm 1.12. Adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 6, 12 1.13. Adaption ZEQ 03, size 1.3 mm, straight, holes: 6, 12 1.14. Strut JZQ 06 right/left, size 1.3 mm/ 1.5 mm, OBLIQUE ANGLED, holes: 8 1.15. Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes: 4-10 increments 1 1.16. Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 5-7 increments 1, 8-12 increment 2

- | | |
|--|---|
| <p>1.16.детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 5-7 с шагом 1, 8-12 с шагом 2</p> <p>1.17.верхняя для ключицы JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4+5</p> <p>1.18.восстановительная YSQ 20, изогнутая правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8</p> <p>2. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP):</p> <p>2.1. крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12, 15, 18 мм, отверстий 4, 5, 6, 7</p> <p>2.2. в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10</p> <p>2.3. верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3-8 с шагом 1</p> <p>2.4. верхняя для ключицы JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8</p> <p>2.5. проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 3, 5, 6, 8, 10</p> <p>2.6. проксимальная боковая для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 5, 8</p> <p>2.7. периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2-6 с шагом 1, 8-14 с шагом 2</p> <p>2.8. прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5, 6-22 с шагом 2</p> <p>2.9. метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5-11 с шагом 1, 12-18 с шагом 2.</p> <p>2.10.изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия: 6-30 с шагом 2</p> <p>2.11.дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14</p> <p>2.12.дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14</p> <p>2.13.внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4,6,8,10,12,14</p> <p>2.14.дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14</p> | <p>1.17.Superior for Clavicle JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 4 + 5</p> <p>1.18.Reconstruction YSQ 20, curved, right/left, size 3.5 mm, holes: 6, 7, 8</p> <p>2. Plate Locking compression (LCP):</p> <p>2.1. Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 12, 15, 18 mm, Holes 4,5,6,7</p> <p>2.2. in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10</p> <p>2.3. Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 3-8 increments 1</p> <p>2.4. Superior Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 6, 7, 8</p> <p>2.5. Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 3, 5, 6, 8, 10</p> <p>2.6. Proximal Lateral for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 5,8</p> <p>2.7. Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 2-6 increments 1, 8-14 increments 2</p> <p>2.8. Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 5, 6-22 increments 2</p> <p>2.9. Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 5-11 increments 1, 12-18 increments 2</p> <p>2.10.Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes: 6-30 increments 2</p> <p>2.11.dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 3, 5, 7, 9, 14</p> <p>2.12.dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 3, 5, 7, 9, 14</p> <p>2.13.Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 4,6,8,10,12,14</p> <p>2.14.Distal Humerus, medial YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 3, 5, 7, 9, 14</p> |
|--|---|

- 2.15.проксимальная периферийная для лучевой кости, JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2, 3, 4
- 2.16.проксимальная для шейки лучевой кости JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2, 3, 4
- 2.17.локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2, 4, 6, 8, 10, 12
- 2.18.прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4-13 с шагом 1
- 2.19.изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 8-22 с шагом 2
- 2.20.при остеотомии локтевой кости, ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия: 6, 8
- 2.21.ладонная лучевой кости, YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3, 5, 7
- 2.22.внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с четырьмя/пятью отверстиями, отверстия: 3, 5
- 2.23.дистальная локтевой кости JSQ 01, правая/ левая, размер 2,0 мм, отверстий 7
- 2.24.задняя дистальная для лучевой кости JSQ 01, прямая, размер 2,4 мм, отверстия: 5, 6
- 2.25.проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4, 5, 7, 9, 11
- 2.26.периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 2-16 с шагом 2
- 2.27.проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 5, 7, 9, 11, 13
- 2.28.под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2
- 2.29.прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 2, 4, 6-18 с шагом 1, 20
- 2.30.изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 12-26 с шагом 2
- 2.31.изогнутая мыщелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6-20 с шагом 2
- 2.32.проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2

- 2.15.Proximal Radius Rim JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 2, 3, 4
- 2.16.Proximal Radius Neck JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 2, 3, 4
- 2.17.Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 2, 4, 6, 8, 10, 12
- 2.18.Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 4-13 increments 1
- 2.19.Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 8-22 increments 2
- 2.20.Ulna Osteotomy ZSQ 03, size 2.7 mm, holes: 6, 8
- 2.21.Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 3, 5, 7
- 2.22.Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 4/5 Holes, holes: 3, 5
- 2.23.Distal Ulna JSQ 01, right/left, size 2.0 mm, holes: 7
- 2.24.Dorsal Distal Radius JSQ 01, straight, size 2.4 mm, holes: 5, 6
- 2.25.Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4, 5, 7, 9, 11
- 2.26.Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 2-16 increments 2
- 2.27.Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 5, 7, 9, 11, 13
- 2.28.for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes: 4-12 increments 2
- 2.29.Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 2, 4, 6-18 increments 1, 20
- 2.30.Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 12-26 increments 2
- 2.31.Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 6-20 increments 2
- 2.32.Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-16 increments 2

- 2.33.проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2
- 2.34.проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
- 2.35.проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, 4,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2
- 2.36.заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 2-10 с шагом 2
- 2.37.метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3-11 с шагом 1, 13
- 2.38.прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 2-14 с шагом 1, 16, 18
- 2.39.изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, ,отверстия: 10-22 с шагом 2
- 2.40.медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2
- 2.41.переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 5-21 с шагом 2
- 2.42.медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2
- 2.43.поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3-7 с шагом 1, 9, 11, 13
- 2.44.периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2
- 2.45.восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1, 12-22 с шагом 2
- 2.46.восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 6-18 с шагом 2
- 2.47.прямая ZSQ 09, размер 1,5 мм, отверстия: 4, 6
- 2.48.прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм/ 2,4 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1, 10
- 2.49.переходная ZEQ 03, размер 2,0 мм/ 2,4 мм, отверстия: 12
- 2.50.мышцелковая YSQ 01, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7

- 2.33.Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 4-14 increments 2
- 2.34.Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
- 2.35.Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, 4.5 mm, holes: 4-16 increments 2
- 2.36.Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 2-10 increments 2
- 2.37.Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 3-11 increments 1, 13
- 2.38.Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 2-14 increments 1, 16, 18
- 2.39.Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 10-22 increments 2
- 2.40.Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-14 increments 2
- 2.41.Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 5-21 increments 2
- 2.42.Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-14 increments 2
- 2.43.Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 3-7 increments 1, 9, 11, 13
- 2.44.Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-12 increments 2
- 2.45.Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 5-10 increments 1, 12-22 increments 2

- 2.51.мышцелковая YSQ 01, размер 2,4 мм, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий 7
 - 2.52.вращательная коррекционная YSQ 02, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 4, 5
 - 2.53.для сращивания запястья ZSQ 09, короткий/стандартный изгиб, длина 118 мм
 - 2.54.для сращивания запястья ZSQ 09, прямая, длина 112 мм
 - 2.55.детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм/5,0 мм, отверстий 3, 4, 5, 7, угол: 110-150° с шагом 10°
 - 2.56.детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1
 - 2.57.детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 5-12 с шагом 1
 - 2.58.внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с 4мя/5ю отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 8, 10, 12
 - 2.59.для мышцелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 5-11 с шагом 2
 - 2.60.детская для шейки бедра YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстий 2, угол: 100°, 110°, 130°
 - 2.61.детская мышцелковая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстия: 3, 5, 7, угол: 90°
 - 2.62.изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм
- 3. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP):
 - 3.1. передняя для ключицы JSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8
 - 3.2. дистальная для бедренной кости ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4x121 мм
 - 4. Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем

- 2.46.Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 6-18 increments 2
 - 2.47.Straight ZSQ 09, size 1.5 mm, holes: 4, 6
 - 2.48.Straight ZSQ 09, size 2.0 mm/2.4 mm, holes: 4-8 increments 1, 10
 - 2.49.Adaption ZEQ 03, size 2.0mm/2.4mm, holes: 12
 - 2.50.Condylar YSQ 01 size 2.0 mm, head with two Holes, holes 7
 - 2.51.Condylar YSQ 01 size 2.4 mm, head with two Holes, holes 7
 - 2.52.Rotation Correction YSQ 02 size 2.0 mm, head with two Holes, holes: 4, 5
 - 2.53.Wrist Fusion ZSQ 09, short /Standard bend, length 118 mm
 - 2.54.Wrist Fusion ZSQ 09, straight, length 112 mm
 - 2.55.Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm/5.0 mm, holes 3, 4, 5, 7 mm, angles 110-150° increments 10°
 - 2.56.Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 5-10 increments 1
 - 2.57.Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 5-12 increments 1
 - 2.58.Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 4/5 holes, EXTRALARGE holes: 8, 10, 12
 - 2.59.for Condylar Distal Femur JZQ 05 right/left, size 5.0 mm, holes: 5-11 increments 2
 - 2.60.Pediatric for Hip YSQ 19, size 2.7 mm, holes 2, angles: 100°, 110°, 130°
 - 2.61.Pediatric Condylar YSQ 19, size 5.0 mm, holes 3, 5, 7, angles: 90°
 - 2.62.Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm
- 3. Plate Medial Locking compression (LCP):
 - 3.1. Anterior for Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 6, 7, 8
 - 3.2. Distal for Femur ZSQ 05, size 4.5 mm, holes x length: 4x121 mm
 - 4. Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable

- 4.1. JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 3x137 мм, 5x185 мм, 7x233 мм, 9x281 мм, 11x329 мм
- 4.2. JZQ 03, короткая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 1x83 мм
5. Штифт установочный для серкляжа JZQ 02, размер 5,0 мм
6. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP):
 - 6.1. мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 6x170 мм, 8x206 мм, 10x242 мм, 12x278 мм, 14x314 мм, 16x350 мм, 18x386 мм
 - 6.2. проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4x87 мм, 6x117 мм, 8x147 мм, 10x177 мм, 12x207 мм, 14x237 мм
 - 6.3. проксимальная боковой плечевой фиксации (PLHP) JSQ 06, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 5x85 мм, 8x121 мм
 - 6.4. проксимальная для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x73 мм
 - 6.5. для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x90 мм, 4x116 мм, 6x142 мм
 - 6.6. проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x131 мм, 8x157 мм, 10x184 мм, 12x211 мм
 - 6.7. двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 6x85 мм, 7x94 мм, 8x103 мм, 9x112 мм, 11x121 мм, 13x130 мм
 - 6.8. волярная дистальная лучевая JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстий 5
 - 6.9. передняя для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x102 мм, 4x118 мм
 - 6.10. верхняя передняя для ключицы ZSQ 04, с поперечным удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x105 мм, 7x120 мм, 8x130 мм
 - 6.11. задняя для большеберцовой, таранной и пяточной JSQ 06, правая/левая, отверстия x длина: 3x102 мм, 4x118 мм
 - 6.12. внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с четырьмя/пятью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 3x47 мм, 5x65 мм

- 4.1. JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 3x137 mm, 5x185 mm, 7x233 mm, 9x281 mm, 11x329 mm
- 4.2. JZQ 03, short, size 4.5 mm, holes x length: 1x83 mm
5. Pin Positioning for Cerclage JZQ 02, size 5.0 mm
6. Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP)
 - 6.1. Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 6x170 mm, 8x206 mm, 10x242 mm, 12x278 mm, 14x314 mm, 16x350 mm, 18x386 mm
 - 6.2. Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 4x87 mm, 6x117 mm, 8x147 mm, 10x177 mm, 12x207 mm, 14x237 mm
 - 6.3. Proximal Lateral Humerus Plate (PLHP) JSQ 06, size 3,5 mm, holes x length: 5x85 mm, 8x121 mm
 - 6.4. Proximal for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x73 mm
 - 6.5. for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x90 mm, 4x116 mm, 6x142 mm
 - 6.6. Proximal for Ulna, extra articular ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 6x131 mm, 8x157 mm, 10x184 mm, 12x211 mm
 - 6.7. Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 6x85 mm, 7x94 mm, 8x103 mm, 9x112 mm, 11x121 mm, 13x130 mm
 - 6.8. volar Rim Distal Radius JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, head with 6 Holes, holes 5
 - 6.9. Anterior for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 3x102 mm, 4x118 mm
 - 6.10. Superior Anterior for Clavicle ZSQ 04, with lateral extension, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 6x105 mm, 7x120 mm, 8x130 mm
 - 6.11. Posterior for Tibiotalar JSQ 06, right/left, holes x length: 3x102 mm, 4x118 mm
 - 6.12. Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 4/5 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 3x47 mm, 5x65 mm

- 6.13. переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x82 мм, 6x112 мм, 8x142 мм, 10x172 мм, 12x202 мм
 - 6.14. проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 3-13 с шагом 1
 - 6.15. проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 3-9 с шагом 1
 - 6.16. изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20
 - 6.17. проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-9 с шагом 1, 11, 13, 15
 - 6.18. проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-8 с шагом 1, 10, 12, 14, 16
 - 6.19. переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-8 с шагом 1, 10, 12, 14, 16
 - 6.20. поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 7, 9, 10, 11, 12
 - 6.21. двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 2, 3, 4, 5
 - 6.22. двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 2, 3, 4, 5
 - 6.23. задняя дистальная для лучевой кости, прямая JSQ 01, размер 2,4 мм, отверстия: 5, 6
 - 6.24. поперечная для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x109 мм, 4x125 мм
 - 6.25. поперечная для большеберцовой, таранной и пяточной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x139 мм, 4x154 мм
 - 6.26. поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм, 2x82 мм, 5x121 мм, 7x147 мм
 - 6.27. поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x79 мм, 4x92 мм, 5x105 мм, 6x118 мм, 7x131 мм
7. Пластина с 2 отверстиями ZSQ 03, размер 2,7 мм, длина 20 мм

- 6.13. Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 4x82 mm, 6x112 mm, 8x142 mm, 10x172 mm, 12x202 mm
 - 6.14. Proximal Humerus JZQ 03, holes: 3-13 increments 1
 - 6.15. Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 3-9 increments 1
 - 6.16. Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 3-12 increments 1, 14, 16, 18, 20
 - 6.17. Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3-9 increments 1, 11, 13, 15
 - 6.18. Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3-8 increments 1, 10, 12, 14, 16
 - 6.19. Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3-8 increments 1, 10, 12, 14, 16
 - 6.20. lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 7, 9, 10, 11, 12
 - 6.21. Two-Column Volar for Distal Radius JZQ 04, right/left, 2.4mm, head with 6 Holes, holes: 2, 3, 4, 5
 - 6.22. Two-Column Volar for Distal Radius ZEQ 01, right/left, 2.4mm, head with 7 Holes, holes: 2, 3, 4, 5
- 6.23. Dorsal Distal for Radius, straight JSQ 01, size 2.4 mm, holes: 5, 6
- 6.24. Lateral for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 3x109 mm, 4x125 mm
- 6.25. Lateral for Tibiototalcalcaneal JSQ 06, holes x length: 3x139 mm, 4x154 mm
- 6.26. Lateral Distal for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x69 mm, 2x82 mm, 5x121 mm, 7x147 mm
- 6.27. Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 3x79 mm, 4x92 mm, 5x105 mm, 6x118 mm, 7x131 mm
7. Plate with 2-Holes ZSQ 03, size 2.7 mm, length 20 mm

8. Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 5-14 с шагом 1
9. Пластина переходная:
 - 9.1. ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 6x41 мм, 12x82 мм
 - 9.2. JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x27 мм, 12x57 мм
 - 9.3. JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x39 мм, 12x78 мм
 - 9.4. ZE03 размер 1,5 мм, отверстия: 6, 8, 10, 20
10. Пластина Т-образная:
 - 10.1. JZQ 01, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x34 мм, 4x42 мм
 - 10.2. JZQ 02, головка с тремя/четырьмя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм, 4x23 мм
 - 10.3. JZQ 03, головка с двумя/тремя/четырьмя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм, 4x34 мм
 - 10.4. JZQ 04, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 4x35 мм
 - 10.5. задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости JZQ 03, головка с тремя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм
 - 10.6. фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм, 6x90 мм
 - 10.7. фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4, 5, 6
 - 10.8. задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4
 - 10.9. фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4, 5, 6
 - 10.10. задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4
 - 10.11. фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 4,5 мм, отверстий: 4-8 с шагом 1
 - 10.12. дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 3, 5

8. Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 5-14 increments 1
9. Plate adaption:
 - 9.1. ZSQ 03, size 2.7 mm, holes x length: 6x41 mm, 12x82 mm
 - 9.2. JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length: 6x27 mm, 12x57 mm
 - 9.3. JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 6x39 mm, 12x78 mm
 - 9.4. ZE03, size 1.5 mm, holes: 6, 8, 10, 20
10. T-Plate:
 - 10.1. JZQ 01, head with two holes, size 2.7 mm. holes x length: 3x34 mm, 4x42 mm
 - 10.2. JZQ 02, head with three/four holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm, 4x23 mm
 - 10.3. JZQ 03, head with two/three/four holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm, 4x34 mm
 - 10.4. JZQ 04, head with two holes, size 2.4 mm, holes x length: 4x35 mm
 - 10.5. Dorsal Distal Radius Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) JZQ 03, head with 3 holes, size 2.4 mm, holes x length: 5x51 mm
 - 10.6. Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral Distal for Tibial ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 4x72 mm, 6x90 mm
 - 10.7. Locking Compression (LCP) YSQ 09, right/left, size 3.5 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 3, 4, 5, 6
 - 10.8. Dorsal Distal Locking Compression (LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 3, 4
 - 10.9. Locking Compression (LCP) YSQ 01, size 3.5 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 3, 4, 5, 6
 - 10.10. Dorsal Distal Lateral Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 3, 4
 - 10.11. Locking Compression (LCP) YSQ 09, size 4.5 mm, holes: 4-8 increments 1
 - 10.12. Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 3, 5

- 10.13. задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 8, 12, 16
 - 10.14. фиксирующая YSQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с двумя/тремя/четырьмя отверстиями
 - 10.15. фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 6, 8, головка с тремя/четырьмя отверстиями
 - 10.16. фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,0 мм/2,4 мм, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий 7
 - 10.17. YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстий 7
 - 10.18. детская фиксирующая YSQ 19 размер 2,7 мм, отверстий 3, 4, 5
 - 10.19. детская фиксирующая YSQ 19 размер 3,5 мм, отверстий 3, 5, 7
 - 10.20. JZQ 04, наклонная, 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстий x длина: 3x29 мм
11. Пластина L-образная:
- 11.1. JZQ 01, правая/левая, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстий x длина: 3x34 мм
 - 11.2. наклонная, JZQ 01, левая/правая, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстий x длина: 3x36 мм
 - 11.3. JZQ 02, правая/левая, головка с двумя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм
 - 11.4. JZQ 03, правая/левая, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстий x длина: 8x60 мм
 - 11.5. наклонная, JZQ 04, левая/правая, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстий x длина: 4x37,5 мм
 - 11.6. YSQ12 правая/левая, размер 1,5 мм, отверстий: 5, 7, 10
 - 11.7. YSQ12 правая/левая, размер 2,0 мм, отверстий: 5
 - 11.8. опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-9 с шагом 1
12. Пластина X - образная:
- 12.1. JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 22 x 14 мм, 24 x 18 мм, 30 x 20 мм, 36x20 мм
 - 12.2. фиксирующая JZQ 01, размер 2,7 мм, малая/средняя/крупная, длина: 24 x 18 мм, 30 x 20 мм, 36x20 мм

- 10.13. Posterior Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 8, 12, 16
 - 10.14. Locking YSQ 09, size 1.5 mm, holes: 8, head with two/three/four holes
 - 10.15. Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes: 6, 8, head with three/four holes
 - 10.16. Locking Compression (LCP), YSQ 09 size 2.0 mm/2.4 mm, head with two/three holes, holes 7
 - 10.17. YSQ 09 size 1.5 mm holes 7
 - 10.18. Pediatric Locking YSQ 19 size 2.7 mm holes 3, 4, 5
 - 10.19. Pediatric Locking YSQ 19 size 3.5 mm holes 3, 5, 7
 - 10.20. JZQ 04, Oblique, size 2.4 mm, two holes head, right/left, holes x length: 3x29 mm
11. L-Plate:
- 11.1. JZQ 01, right/left, head with two holes, size 2.7 mm, holes x length: 3x34 mm
 - 11.2. Oblique JZQ 01, right/left, head with two holes, size 2.7 mm, holes x length: 3x36 mm
 - 11.3. JZQ 02, right/left, head with two holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm
 - 11.4. JZQ 03, right/left, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm
 - 11.5. Oblique JZQ 04, right/left, head with two holes, size 2.4 mm, holes x length: 4x37,5 mm
 - 11.6. YSQ12, right/left, size 1.5 mm, holes: 5, 7, 10
 - 11.7. YSQ12, right/left, size 2.0 mm, holes: 5
 - 11.8. Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 4-9 increments 1
12. X-Plate:
- 12.1. JZQ 01 size 2.7 mm, holes 4, length: 22 x 14 mm, 24 x 18 mm, 30 x 20 mm, 36x20 mm
 - 12.2. Locking JZQ 01 size 2.7 mm, small/medium/large, length: 24 x 18 mm, 30 x 20 mm, 36x20 mm

- 12.3. фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, сверх малая/малая/средняя/ крупная, длина: 23,5 X 15 мм, 27 X 18 мм, 32 X 20 мм, 36 X 20 мм
- 12.4. JZQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 4
13. Пластина для кубовидной кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстий 11
14. Пластина для заднего и среднего отдела стопы, , ZSQ 04, размер 2.7 мм, отверстия x длина: 5x31 мм, 8x45 мм
15. Пластина пяточная:
- 15.1. I ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 10x49 мм, 12x56 мм
- 15.2. II ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 11x59 мм, 13x68 мм
- 15.3. III ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 14x60 мм, 14x70 мм
- 15.4. IV ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 13x79 мм, 15x88 мм
- 15.5. V ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 20x88 мм
16. Пластина Y-образная:
- 16.1.JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x42 мм, 4x24 мм, головка с тремя отверстиями
- 16.2.JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x61,5 мм, 4x35,5 мм, головка с тремя отверстиями
- 16.3.фиксирующая YSQ 01 размер 1,3 мм /1,5 мм, отверстий 8, головка с тремя отверстиями
- 16.4.фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 2,0 мм/2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий 7
- 16.5.JZQ 03, размер 1,5 мм, отверстия 5
- 16.6.двойная JZQ 03, размер 1,5 мм/2,0 мм, отверстий 6
17. Пластина мыщелковая:
- 17.1.JZQ 02, головка с двумя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x36 мм, 4x22 мм
- 17.2. небольшая JZQ 03, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x45,5 мм
- 17.3. небольшая JSQ 01, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 1,5 мм/2,0 мм, отверстий 6
- 17.4.95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 90 мм, 7 x 120 мм, 9 x 150 мм, 12 x 200 мм, длина клинка: 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм

- 12.3.Locking VA JZQ 01 size 2.7 mm, extra small/small/medium/large, length: 23,5 X 15 mm, 27 X 18 mm, 32 X 20 mm, 36 X 20 mm
- 12.4.JZQ 09 size 1.5 mm, holes 4
13. Plate for Cuboid ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes 11
14. Plate for Hind and Midfoot, ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 5x31 mm, 8x45 mm
15. Calcaneal Plate:
- 15.1.I ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 10x49 mm, 12x56 mm
- 15.2.II ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 11x59 mm, 13x68 mm
- 15.3.III ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 14x60 mm, 14x70 mm
- 15.4.IV ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 13x79 mm, 15x88 mm
- 15.5.V ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 20x88 mm
16. Y-Plate, head with three holes:
- 16.1.JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length: 8x42 mm, 4x24 mm, head with three holes
- 16.2.JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 8x61.5 mm, 4x35.5 mm, head with three holes
- 16.3.Locking YSQ 01 size 1.3 mm /1.5 mm, holes 8, head with three holes
- 16.4.Locking Compression (LCP) YSQ 01 size 2.0 mm/2.4 mm, head with three holes, holes 7, head with three holes
- 16.5.JZQ 03, size 1.5 mm, holes 5
- 16.6.Double JZQ 03, size 1.5 mm/2.0 mm, holes 6
17. Condylar Plate:
- 17.1.JZQ 02, head with two holes, size 1.5 mm, holes x length: 6x36 mm, 4x22 mm
- 17.2.mini JZQ 03, head with one hole, Pin right /left, size 2.0 mm, holes x length: 6x45,5 mm
- 17.3.mini JSQ 01, head with one hole, Pin right /left, size 1.5 mm/2.0 mm, holes 6
- 17.4.95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 90 mm, 7 x 120 mm, 9 x 150 mm, 12 x 200 mm, Blade Length: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm

18. Пластина с крючком при толчковом переломе JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 1x8,5 мм
19. Пластина Z-образная:
 - 19.1. JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 9x24,5 мм, 13x34,5 мм
 - 19.2. JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 9x31 мм, 13x44 мм
 - 19.3. фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм/2,0 мм, отверстия: 9, 13
20. Пластина сетчатая
 - 20.1. JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x11 мм, 6x17,5 мм, 8x24 мм, 10x30,5 мм, 12x37 мм
 - 20.2. JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x13 мм, 6x22 мм, 8x30 мм, 10x38 мм, 12x46 мм, 14x54 мм, 16x62 мм
 - 20.3. фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2
 - 20.4. фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2
21. Пластина коррекционная:
 - 21.1. вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34,5 мм, 5x42 мм
 - 21.2. JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x36 мм
 - 21.3. вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 4x35,5 мм, 5x44 мм
 - 21.4. JZQ 01 размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x28 мм
22. Кабель титановый JZQ 02, диаметр 1,7 мм, длина 500 мм
23. Обжим для кабеля JZQ 02, размер 1,8 мм
24. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP):
 - 24.1. для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм, 2x82 мм, 4x108 мм, 6x134 мм
 - 24.2. для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x72 мм, 2x85 мм, 4x111 мм, 6x137 мм
 - 24.3. для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x112 мм, 6x142 мм, 8x172 мм, 10x202 мм, 12x232 мм
 - 24.4. дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с/без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 3x75 мм, 4x88 мм, 7x127 мм, 9x153 мм

18. Plate with Avulsion Fracture Hook JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 1x8,5 mm
19. Z-Plate:
 - 19.1. JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 9x24,5 mm, 13x34,5 mm
 - 19.2. JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 9x31 mm, 13x44 mm
 - 19.3. Locking YSQ 09 size 1.5 mm/2.0 mm, holes: 9, 13
20. Plate Grid
 - 20.1. JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 4x11 mm, 6x17,5 mm, 8x24 mm, 10x30,5 mm, 12x37 mm
 - 20.2. JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 4x13 mm, 6x22 mm, 8x30 mm, 10x38 mm, 12x46 mm, 14x54 mm, 16x62 mm
 - 20.3. Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 4-12 increments 2
 - 20.4. Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 4-16 increments 2
21. Plate Correction:
 - 21.1. Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34.5 mm, 5x42 mm
 - 21.2. JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 6x36 mm
 - 21.3. Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.4 mm, holes x length: 4x35.5 mm, 5x44 mm
 - 21.4. JZQ 01 size 1.5 mm, holes x length: 6x28 mm
22. Titanium Cable JZQ 02, diameter 1,7 mm, length 500 mm
23. Crimp for Cable JZQ 02, size 1.8 mm
24. Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP):
 - 24.1. for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x69 mm, 2x82 mm, 4x108 mm, 6x134 mm
 - 24.2. for Humeral ZSQ 04 with Extension, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x72 mm, 2x85 mm, 4x111 mm, 6x137 mm
 - 24.3. for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 4x112 mm, 6x142 mm, 8x172 mm, 10x202 mm, 12x232 mm
 - 24.4. Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 with/without lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 3x75 mm, 4x88 mm, 7x127 mm, 9x153 mm

25. Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP)
- 25.1. задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя/тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм
- 25.2. задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x55 мм
- 25.3. заднепоперечная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм, 6x90 мм
- 25.4. задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол/наклонная, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий: 3, 4
26. Пластина L-образная верхнечелюстная:
- 26.1. JZQ 03, 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.2. JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.3. анатомическая JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.4. JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.5. JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.6. JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.7. JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая
- 26.8. JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая
27. Пластина I-образная верхнечелюстная:
- 27.1. JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия 4, толщина 0,8 мм/0,6 мм
28. Пластина верхнечелюстная:
- 28.1. переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 0,8 мм/0,6 мм

25. L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP):
- 25.1. Dorsal Radius, right angle, head with two/three holes JZQ 03, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 5x51 mm
- 25.2. Dorsal Radius, oblique, head with three holes JZQ 03, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 5x55 mm
- 25.3. Posterolateral for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 4x72 mm, 6x90 mm
- 25.4. Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, right angle/oblique, head with 2/3 Holes, holes: 3, 4
26. L-Plate Maxillary:
- 26.1. JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long/medium/short
- 26.2. JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short
- 26.3. anatomic JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short
- 26.4. JZQ 03 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long/medium/short
- 26.5. JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short
- 26.6. JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short
- 26.7. JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long/medium/short
- 26.8. JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short
27. I-Plates Maxillary:
- 27.1. JZQ 03, size 2.0 mm, holes 4, thickness 0.8 mm/0.6 mm
28. Plates Maxillary:
- 28.1. Adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes: 20, length 118 mm, thickness 0.8 mm/0.6 mm

- 28.2. переходная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 1,0 мм
- 28.3. JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 2 -10 мм с шагом 2 мм, отверстия: 5+3
29. Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 4 – 10 мм с шагом 2 мм
30. Пластина с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстия 4, длина 33, 40 мм
31. Пластина для подбородка с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстий 1
32. Пластина сагиттальная раздельная:
- 32.1. JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 6 -12 мм с шагом 2 мм, отверстия: 6
- 32.2. JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 6 -12 мм с шагом 2 мм, отверстия: 4
33. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости:
- 33.1. медиальная JZQ 01, размер 4,5 мм, отверстий 4, длина 115 мм
- 33.2. медиальная JZQ 01, малая, размер 4,5 мм, отверстий 4, длина 112 мм
- 33.3. поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 3, 4
34. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости:
- 34.1. медиальная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий 4, 5
- 34.2. поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 4, 5, 6
35. Пластина L-образная фиксирующая:
- 35.1. динамическая компрессионная YSQ 13, правая/левая, размер 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстия x длина: 5x27,5 мм, 7x36,5 мм, 9x45,5 мм
- 35.2. JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм
- 35.3. детская YSQ 19, правая/левая, размер: 3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7
36. Лоскут черепной NIAGARA JZQ 04, длина: 11 мм, 13 мм, 18 мм, 22 мм

- 28.2. Adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes: 20, length 118 mm (thickness 1.0 mm)
- 28.3. JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 2-10 mm increments 2 mm, holes 5+3
29. Plate Chin JZQ 03, size 2.0, with Double-Curved, holes 5, length 4 – 10 mm increments 2 mm
30. SplitFix Plates JZQ 03 size 2.0, holes 4, length 33, 40 mm
31. Plates Slider for SplitFix JZQ 03 size 2.0, holes 1
32. Plates Sagittal Split:
- 32.1. JZQ 03, Curved, size 2.0, length: 6 -12 mm increments 2 mm, holes: 6
- 32.2. JZQ 03, Straight, size 2.0, length: 6 -12 mm increments 2 mm, holes: 4
33. Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy:
- 33.1. Medial JZQ 01 size 4.5 mm, holes 4, length: 115 mm
- 33.2. Medial JZQ 01 small, size 4.5 mm, holes 4, length: 112 mm
- 33.3. Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 3, 4
34. Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy:
- 34.1. Medial JZQ 01 right/left, size 4.5 mm, holes 4, 5
- 34.2. Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 4, 5, 6
35. L-Plate, Locking:
- 35.1. Dynamic Compression YSQ 13, right/left, size 1.5 mm, head with two holes, holes: 5x27.5 mm, 7x36.5 mm, 9x45.5 mm
- 35.2. JZQ 02, right/left, size: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, head with two holes, holes: 5-8 mm increments 1 mm
- 35.3. Pediatric YSQ 19, right/left, size: 3.5 mm, holes: 3, 5, 7
36. Cranial Flap NIAGARA JZQ 04, length: 11 mm, 13 mm, 18 mm, 22 mm

37. Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP):

37.1. YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 51 мм, 5 x 64 мм, 6 x 77 мм, 7 x 90 мм, 8 x 103 мм, 9 x 116 мм, 10 x 129 мм, 11 x 142 мм, 12 x 155 мм, 14 x 168 мм, 16 x 181 мм, 18 x 194 мм, 20 x 207 мм

37.2. узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 69 мм, 5 x 87 мм, 6 x 105 мм, 7 x 123 мм, 8 x 141 мм, 9 x 159 мм, 10 x 177 мм, 11 x 195 мм, 12 x 213 мм, 14 x 231 мм, 16 x 249 мм, 18 x 267 мм, 20 x 285 мм

37.3. широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 72 мм, 5 x 90 мм, 6 x 108 мм, 7 x 126 мм, 8 x 144 мм, 9 x 162 мм, 10 x 180 мм, 11 x 198 мм, 12 x 216 мм, 14 x 252 мм, 16 x 270 мм, 18 x 288 мм, 20 x 306 мм

38. Пластина на одну треть трубчатой кости

38.1. ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 49 мм, 5 x 61 мм, 6 x 73 мм, 7 x 85 мм, 8 x 97 мм, 9 x 109 мм, 10 x 121 мм

38.2. фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 3-14 с шагом 1

39. Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 6, 7, 8, 10, 12

40. Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP)

40.1. задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4

40.2. задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя/тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4, 5

40.3. YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1

41. Пластина под динамический мыщелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 4-16 с шагом 1

42. Пластина фиксирующая с переменным углом

42.1. C-образная для сращения ZSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 27 мм

42.2. прямая для сращения ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4 x 40 мм

42.3. L-образная для сращения YSQ 20, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 44 мм, 4 x 62 мм

37. Plate LC-DCP:

37.1. YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 4 x 51 mm, 5 x 64 mm, 6 x 77 mm, 7 x 90 mm, 8 x 103 mm, 9 x 116 mm, 10 x 129 mm, 11 x 142 mm, 12 x 155 mm, 14 x 168 mm, 16 x 181 mm, 18 x 194 mm, 20 x 207 mm

37.2. Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 4 x 69 mm, 5 x 87 mm, 6 x 105 mm, 7 x 123 mm, 8 x 141 mm, 9 x 159 mm, 10 x 177 mm, 11 x 195 mm, 12 x 213 mm, 14 x 231 mm, 16 x 249 mm, 18 x 267 mm, 20 x 285 mm

37.3. Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 4 x 72 mm, 5 x 90 mm, 6 x 108 mm, 7 x 126 mm, 8 x 144 mm, 9 x 162 mm, 10 x 180 mm, 11 x 198 mm, 12 x 216 mm, 14 x 252 mm, 16 x 270 mm, 18 x 288 mm, 20 x 306 mm

38. Plate One-third Tubular

38.1. ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 4 x 49 mm, 5 x 61 mm, 6 x 73 mm, 7 x 85 mm, 8 x 97 mm, 9 x 109 mm, 10 x 121 mm

38.2. Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 3-14 increments 1

39. Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 6, 7, 8, 10, 12

40. L-Plate Distal Locking compression (LCP):

40.1. Dorsal Radius, oblique, head with three holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3, 4

40.2. Dorsal Radius, right angle, head with 2/3 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3, 4, 5

40.3. YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 4-8 increments 1

41. Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 4-16 increments 1

42. Plate Locking with VA

42.1. C-Fusion ZSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 27 mm

42.2. Straight Fusion, ZSQ 03, size 2.7 mm, holes x length: 4 x 40 mm

42.3. L-Fusion YSQ 20, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 44 mm, 4 x 62 mm

42.4. T-Fusion YSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 42 mm, 4 x 60 mm, 7 x 92 mm

- 42.4. Т-образная, YSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 42 мм, 4 x 60 мм, 7 x 92 мм
- 42.5. клеверообразная для сращивания YSQ 13, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 45 мм, 4 x 64 мм
- 42.6. для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов ZSQ 12, правая/левая, размер 2,7 мм, угол: 0°, 5°, 10°, длина: 42 мм
- 42.7. для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов YSQ 02, размер 2,7 мм, длина: длинная 48 мм, стандартная 39 мм
- 43. Пластина Н-образная YSQ19 размер 1,5 мм, отверстий 11
- 44. Пластина глазничная:
 - 44.1. YSQ20, размер 1,5 мм, отверстия: 8, 10, 12
 - 44.2. YSQ20 изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 4, 5, 7
- 45. Пластина для нижней стенки глазницы универсальная YSQ16, размер 1,5 мм
- 46. Пластина рамная:
 - 46.1. JZQ08 размер 1,5 мм, отверстий 4
 - 46.2. JZQ08 квадратная, размер 2,0 мм, отверстий 4
- 47. Пластина опорная:
 - 47.1. JZQ08, размер 1,5 мм, отверстий 2x8
 - 47.2. JZQ08 размер 2,0 мм, отверстий 2x4
 - 47.3. YSQ19 нижнечелюстная изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 8
 - 47.4. JZQ 01, правая/левая, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x23 мм
 - 47.5. опорная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x31 мм
- 48. Пластина ячеистая:
 - 48.1. YSQ16, размер 1,5 мм, 100 мм X 100 мм
 - 48.2. регулируемая, квадратная YSQ16, размер 1,5 мм, габариты: 38 мм X 45 мм, 100 мм X 100 мм
 - 48.3. регулируемая, круглая YSQ16, размер 1,5 мм, диаметр 30 мм, 70 мм, 100 мм
- 49. Крышки трепанационных отверстий:
 - 49.1. YSQ16, 1,5, размер 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм
 - 49.2. YSQ16, 1,5, для пунтирования или дренажа, размер 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм
- 50. Пластина двойной ширины YSQ19, размер 2,0 мм, отверстия 9,12

- 42.5. Cloverleaf for Fusion YSQ 13, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 45 mm, 4 x 64 mm
- 42.6. for Fusion 1st MTP ZSQ 12, right/left, size 2.7 mm, angles: 0°, 5°, 10°, length: 42 mm
- 42.7. for Fusion 1st MTP YSQ 02 size 2.7 mm, length: long 48 mm, standard 39 mm
- 43. H-Plate YSQ19 size 1.5 mm, holes 11
- 44. Plate Orbital:
 - 44.1. YSQ20 size 1.5 mm, holes: 8, 10, 12
 - 44.2. YSQ20, curved, size 2.0 mm, holes: 4, 5, 7
- 45. Plate for Orbital Floor Universal YSQ16, size 1.5 mm
- 46. Plate Frame:
 - 46.1. JZQ08, size 1.5 mm holes: 4
 - 46.2. JZQ08, square, size 2.0 mm holes: 4
- 47. Plate Strut:
 - 47.1. JZQ08, size 1.5 mm holes: 2x8
 - 47.2. JZQ08, size 2.0 mm holes: 2x4
 - 47.3. YSQ19 Mandible curved, size 2.0 mm holes: 8
 - 47.4. JZQ 01, right/left, size 1.5 mm, holes x length: 8x23 mm
 - 47.5. JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes x length: 8x31 mm
- 48. Plate Mesh:
 - 48.1. YSQ16, size 1.5 mm, 100 mm X 100 mm
 - 48.2. Contourable, squared YSQ16, size 1.5 mm, dimensions: 38 mm X 45 mm, 100 mm X 100 mm
 - 48.3. Contourable, round YSQ16, size 1.5 mm, diameter: 30 mm, 70 mm, 100 mm
- 49. Burr Hole Covers:
 - 49.1. YSQ16, 1,5, size 12 mm, 15 mm, 17 mm, 24 mm
 - 49.2. YSQ16, 1,5, for Shunt or Drainage, size 12 mm, 15 mm, 17 mm, 24 mm
- 50. Plate Double Wide YSQ19, size 2.0, holes 9,12

51. Пластина нижнечелюстная:

- 51.1. фиксирующая YSQ20, правая/левая размер 2,0 мм/2,4 мм, угловая, отверстий 6+21
- 51.2. фиксирующая YSQ20, двойной угол размер 2,0 мм/2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6
- 51.3. фиксирующая YSQ20, в форме полумесяца, размер 2,0 мм/2,4 мм, отверстия: 2+2, 3+3
- 51.4. фиксирующая YSQ20, дугообразная, размер 2,0 мм/2,4 мм, отверстия: 3+3, 4+4
- 51.5. YSQ20, угловая, правая/левая размер 2,4 мм. отверстий 6+21
- 51.6. YSQ20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6
- 51.7. с промежутком по центру ZE001. размер 2,0 мм, отверстия: 4, 6
- 51.8. ZE003 размер 2,0 мм, отверстия: 4, 6, 12, 20
- 51.9. закрученная ZE002, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 4
- 51.10. переходная, прямая ZE003, размер 2,4 мм, отверстия: 12, 20
- 51.11. фиксирующая, прямая ZE003, размер 2,0 мм/2,4 мм, отверстия: 6, 12, 20

52. Пластина динамического бедренного винта (DHS):

- 52.1. YSQ 36, угол 130°/135°, стандартная, отверстия: 3-12 с шагом 1
- 52.2. YSQ 36, угол 130°/135°, короткий, отверстия: 3-6 с шагом 1

53. Пластина динамическая компрессионная (DCP):

- 53.1. JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 4-10 с шагом 1
- 53.2. узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1
- 53.3. широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1
- 53.4. широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 5-16 с шагом 1, 18

54. Торцевая заглушка ZE001

55. Пластина восстанавливающая:

- 55.1. таза, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20
- 55.2. подвздошно-крестцовая JZQ 07, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4+4
- 55.3. таза, прямая ZE003, размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20

51. Plate Mandible:

- 51.1. LOCK YSQ20 angled right/left, size 2.0 mm/2.4 mm, holes 6+21
- 51.2. LOCK YSQ20 double angled, size 2.0 mm/2.4 mm, holes: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6
- 51.3. LOCK YSQ20 crescent - shaped, size 2.0 mm/2.4 mm, holes 2+2, 3+3
- 51.4. LOCK YSQ20 arc- shaped, size 2.0 mm/2.4 mm, holes 3+3, 4+4
- 51.5. YSQ20 angled right/left, size 2.4 mm, holes 6+21
- 51.6. YSQ20 double angled, size 2.4 mm, holes: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6
- 51.7. with centre space ZE001, size 2.0 mm, holes: 4, 6
- 51.8. ZE003 size 2.0 mm, holes: 4, 6, 12, 20
- 51.9. twisted ZE002 right/left, size 2.0 mm, holes: 4
- 51.10. Adaption straight ZE003, size 2.4 mm, holes: 12, 20
- 51.11. LOCK, straight ZE003 size 2.0 mm/ 2.4 mm, holes: 6, 12, 20

52. Plate DHS:

- 52.1. YSQ 36, angle 130°/135°, Standard, holes: 3-12 increments 1
- 52.2. YSQ 36, angle 130°/135°, Short, holes: 3-6 increments 1

53. Plate DCP:

- 53.1. JZQ 08, size 3.5 mm, holes 4-10 increments 1
- 53.2. Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 4-12 increments 1
- 53.3. broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 4-12 increments 1
- 53.4. Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 5-16, increments 1, 18

54. End Cap ZE001

55. Plate Reconstruction:

- 55.1. Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 4-12 increments 1, 14, 16, 18, 20
- 55.2. Sacroiliac JZQ 07, right/left, size 3.5, holes 4+4
- 55.3. Pelvic, straight ZE003 size 3.5 mm holes: 4-12 increments 1, 14, 16, 18, 20

56. Пластина лобкового сращения
 - 56.1. I, YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия 4, 6, 8
 - 56.2. II, YSQ 20 размер 3,5 мм, длина: 19 мм, 22 мм, 25 мм
57. Пластина крючка для задней стенки вертлужной впадины JZQ 07, размер 3,5 мм, отверстий 3
58. Пластина для подвздошного гребня YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстий 6
59. Пластина для подвздошного крыла YSQ 16, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 8
60. Пластина фрагмента:
 - 60.1. вертлужной впадины с уменьшенной задней стенкой JZQ 06 правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 8+3
 - 60.2. задней стенки вертлужной впадины JZQ 05 правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6+4, 8+4
61. Пластина для крестцово-подвздошного сустава, JZQ 09 размер 3,5 мм, длина 127 мм, 137 мм, 147 мм
62. Пластина для вертлужного:
 - 62.1. заднего столба с двумя 2 усиленными крыльями JZQ 02, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8+2+2
 - 62.2. переднего столба с дополнительным крылом JZQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 11+1
63. Пластина V-образная двусторонняя для вертлужного переднего столба JZQ 08, размер 3,5 мм, длина: 19 мм, 22 мм, 25 мм
64. Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 24 мм, 18 X 26 мм, 18 X 28 мм, 18 X 30 мм
65. Пластина для управления ростом:
 - 65.1. JZQ 01 в форме восьмерки, длина: 12 мм, 16 мм
 - 65.2. YSQ 01 в форме квадрата, длина: 16 мм, 22 мм
66. Пластина прямая черепная ZE01, размер 1,5 мм, отверстия: 2, 4
67. Пластина с петлевым механизмом:
 - 67.1. JZQ 01, размер 12 мм, 16 мм, 20 мм
 - 67.2. в форме бабочки YSQ 01, размер 16 мм, 22 мм
68. Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 3-12 с шагом 1, 14-20 с шагом 2
69. Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 8-11 с шагом 1

56. Plate Pubic Symphysis
 - 56.1. I, YSQ 20 size 3.5 mm holes 4, 6, 8
 - 56.2. II, YSQ 20 size 3.5 mm length 19 mm, 22 mm, 25 mm
57. Posterior Wall Acetabular Hook Plate JZQ 07, size 3.5 mm, holes 3
58. Plate for Iliac Crest YSQ 20, size 3.5 mm, holes 6
59. Plate for Ilium Wing YSQ 16, right/left, size 3.5 mm, holes 8
60. Plate Fragment:
 - 60.1. Acetabular with Posterior Wall Reduction JZQ 06, right/left, size 3.5 mm, holes 8+3
 - 60.2. Posterior Wall Acetabular JZQ 05, right/left, size 3.5 mm, holes 6+4, 8+4
61. Plate Sacroiliac Joint Reduction JZQ 09, size 3.5 mm, length 127 mm, 137 mm, 147 mm
62. Plate for Acetabular:
 - 62.1. Posterior Column with 2 Reinforced Wings JZQ 02 right/left, size 3.5 mm, holes 8+2+2
 - 62.2. Anterior Column with Auxiliary Wing JZQ 06, right/left, size 3.5 mm, holes 11+1
63. V-Plate Bilaterally Anterior Column Acetabular, JZQ 08 size 3.5 mm, length 19 mm, 22 mm, 25 mm
64. Plate Superior Sacroiliac JZQ 09, size 3.5 mm, holes size: 18 X 24 mm, 18 X 26 mm, 18 X 28 mm, 18 X 30 mm
65. Plate for Guided Growth:
 - 65.1. JZQ 01 eight, length: 12 mm, 16 mm
 - 65.2. YSQ 01 quad, length: 16 mm, 22 mm
66. Cranial Straight Plate ZE01 size 1.5 mm, holes: 2, 4
67. Plate with Hinge:
 - 67.1. JZQ 01, size 12 mm, 16 mm, 20 mm
 - 67.2. Quad YSQ 01, size 16 mm, 22 mm
68. Plate for Acetabular FX JZQ 07, holes: 3-12 increments 1, 14-20 increments 2
69. Plate in shape of Cobra Head JZQ 05 holes: 8-11 increments 1

70. Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4,6,9,12 длина стержня: 54 мм, 80 мм, 119 мм, 258 мм, длина клинка: 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм

71. Винт фиксирующий:

71.1. HAQ06 2,0 мм, длина: 6-40 мм с шагом 2 мм

71.2. HAQ06 2,4 мм, длина: 6-50 мм с шагом 2 мм

71.3. с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм

71.4. HAQ06 2,7 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм, 50-60 мм с шагом 5 мм

71.5. с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 6-60 мм с шагом 2 мм

71.6. HAQ06 3,5 мм, длина: 10-90 мм с шагом 2 мм, 45-90 мм с шагом 5 мм

71.7. HAQ06 5,0 мм, длина: 14-40 мм с шагом 2 мм, 15-110 мм с шагом 2 мм

71.8. HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 50-140 мм с шагом 5 мм

71.9. HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 50-140 мм с шагом 5 мм

71.10. HAQ02 1,5 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм

71.11. HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 20-40 мм с шагом 2 мм, 45-60 мм с шагом 5 мм

71.12. HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочкой T25, длина: 22-50 мм с шагом 2 мм, 60,70,75.

71.13. HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм/2,4 мм, длина: 5, 7 мм, 6-18 мм с шагом 2 мм

71.14. с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 10-60 мм с шагом 2 мм, 65-80 с шагом 5 мм

71.15. с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 22-60 мм с шагом 2 мм, 65-90 с шагом 5 мм

72. Винт кортикальный:

72.1. HAQ 02 1,5 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм

72.2. HAQ 04 2,0 мм, длина: 6-40 мм с шагом 2 мм

72.3. HAQ 03 2,4 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм

72.4. HAQ 03 2,7 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм, 50-60 мм с шагом 5 мм

70. Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 4,6,9,12 Shaft Length: 54 mm, 80 mm, 119 mm, 258 mm, Blade Length: 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm

71. Screw Locking:

71.1. HAQ06 2.0 mm, length: 6-40 mm increments 2 mm

71.2. HAQ06 2.4 mm, length: 6-50 mm increments 2 mm

71.3. VA HAQ06 2.4 mm, length: 6-30 mm increments 2 mm

71.4. HAQ06 2.7 mm, length: 8-60 mm increments 2 mm, 50-60 mm increments 5 mm

71.5. with VA HAQ06 2.7 mm, length: 6-60 mm increments 2 mm

71.6. HAQ06 3.5 mm, length: 10-90 mm increments 2 mm, 45-90 mm increments 5 mm

71.7. HAQ06 5.0 mm, length: 14-40 mm increments 2 mm, 15-110 mm increments 5 mm

71.8. HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 50-140 mm increments 5 mm

71.9. HBQ06 Lag 7.3 mm, length: 50-140 mm increments 5 mm

71.10. HAQ02 1.5 mm, length: 6-30 mm increments 2 mm

71.11. HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 20-40 mm increments 2 mm, 45-60 mm increments 5 mm

71.12. HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 22-50 mm increments 2 mm, 60,70,75.

71.13. HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm/2.4 mm, length: 5, 7 mm, 6-18 mm increments 2 mm

71.14. with VA HAQ06 3.5 mm, length: 10-60 mm increments 2 mm, 65-80 mm increments 5 mm

71.15. with VA HAQ03 5.0 mm, length: 22-60 mm increments 2 mm, 65-90 mm increments 5 mm

72. Screw Cortex:

72.1. HAQ 02 1.5 mm, length: 6-30 mm increments 2 mm

72.2. HAQ 04 2.0 mm, length: 6-40 mm increments 2 mm

72.3. HAQ 03 2.4 mm, length: 8-60 mm increments 2 mm

72.4. HAQ 03 2.7 mm, length: 8-60 mm increments 2 mm, 50-60 mm increments 5 mm

- 72.5. HAQ 03 3,5 мм, длина: 10-90 мм с шагом 2 мм, 60-120 мм с шагом 5 мм
- 72.6. HAQ 03 4,5 мм, длина: 14-80 мм с шагом 2 мм, 85-100 мм с шагом 5 мм
- 72.7. HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 20-40 мм с шагом 2 мм
- 72.8. HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22-44 мм с шагом 2 мм
- 72.9. HAQ 02 1,5 мм/2,0 мм/2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм
- 72.10. HAQ 02 1,5 мм/2,0 мм/2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающийся, длина 4-8 мм с шагом 1 мм
- 72.11. HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 6-40 мм с шагом 2 мм
- 72.12. HAQ02, 2,0 мм, низкий профиль, длина 6-40 мм с шагом 2 мм
- 72.13. HAQ02, 1,5 мм, низкий профиль, длина 6-30 мм с шагом 2 мм

73. Винт спонгиозный:

- 73.1. HBQ03 с неполной/полной резьбой 4,0 мм, длина: 10-70 мм с шагом 2 мм, 55 мм
- 73.2. HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм
- 73.3. HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм
- 73.4. HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм
- 73.5. HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм
- 73.6. HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 40-120 мм с шагом 5 мм
- 73.7. HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм
- 73.8. HAQ 06 4,5 мм, длина: 25 -35 с шагом 5 мм
- 73.9. сплошной HAQ06, 4,5 мм, длина: 24 мм, 32 мм

74. Винт сжимающий:

- 74.1. HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 10-30 мм с шагом 1 мм

- 72.5.HAQ 03 3.5 mm, length: 10 -90 mm increments 2 mm, 60-120 mm increments 5 mm
- 72.6.HAQ 03 4.5 mm, length: 14-80 mm increments 2 mm, 85-100 mm increments 5 mm
- 72.7.HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 20-40 mm increments 2 mm
- 72.8.HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22-44 mm increments 2 mm
- 72.9.HAQ 02 1.5 mm/2.0 mm/2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 4, 5, 6, 7, 8-18 mm increments 2 mm
- 72.10. HAQ 02 1.5 mm/2.0 mm/2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 4-8 mm increments 1 mm
- 72.11. HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 6-40 mm increments 2 mm
- 72.12. HAQ02 2.0mm, low profile, length: 6-40 mm increments 2 mm
- 72.13. HAQ02 1.5 mm, low profile, length: 6-30 mm increments 2 mm

73. Screw Cancellous:

- 73.1.HBQ03 partially/fully threaded 4.0 mm length: 10 -70 mm increments 2 mm, 55 mm
- 73.2.HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm
- 73.3.HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm
- 73.4.HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm
- 73.5.HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm
- 73.6.HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 40 -120 mm increments 5 mm
- 73.7.HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm
- 73.8.HAQ 06, 4.5 mm, length: 25 -35 mm increments 5 mm
- 73.9.Solid HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 24 mm, 32 mm

74. Screw Compression:

- 74.1.HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 10 -30 mm increments 1 mm

- 74.2. HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 16-30 мм с шагом 1 мм
- 74.3. HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 65-110 мм с шагом 5 мм
- 74.4. HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 45-150 мм с шагом 5 мм
- 74.5. HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 8-30 мм с шагом 1 мм
- 74.6. HBQ 06 без головки- МИНИ/ стандартный, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм
75. Винт конический канюлированный:
- 75.1. HAQ02, 7,3 мм длина: 30-145 мм с шагом 5 мм
- 75.2. с неполной резьбой HAQ02, 7,3 мм, длина: 30-145 мм с шагом 5 мм
- 75.3. фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 25-145 мм с шагом 5 мм
76. Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 50-120 мм с шагом 5 мм
77. Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 25-75 мм с шагом 5 мм
78. Винт канюлированный:
- 78.1. HAQ02, 2,0 мм короткая/длинная резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм
- 78.2. HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 18-30 мм с шагом 2 мм
- 78.3. HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм
- 78.4. HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм
- 78.5. HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 14-40 мм с шагом 2 мм
- 78.6. HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм
- 78.7. HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм, 35 мм, 45 мм, 50 мм
- 78.8. HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм, 35 мм, 45 мм, 50 мм
- 78.9. HBQ03, 4,0 мм короткая/длинная резьба, длина: 18-50 мм с шагом 2 мм
- 78.10. HBQ03, 4,5 мм короткая/длинная резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм
- 78.11. HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм

- 74.2.HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 16 -30 mm increments 1 mm
- 74.3.HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 -110 mm increments 5 mm
- 74.4.HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 45 -150 mm increments 5 mm
- 74.5.HBQ 06 Headless - MICRO length: 8 -30 mm increments 1 mm
- 74.6.HBQ 06 Headless – MINI/ STANDARD, length: 10 -30 mm increments 2 mm
75. Screw Conical Cannulated:
- 75.1.HAQ02, 7.3 mm length: 30 -145 mm increments 5 mm
- 75.2.with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 30 -145 mm increments 5 mm
- 75.3.Locking HAQ02, 5.0 mm length: 25 -145 mm increments 5 mm
76. Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 50 -120 mm increments 5 mm
77. Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 25 -75 mm increments 5 mm
78. Screw Cannulated:
- 78.1.HAQ02, 2.0 mm, short/long thread, length: 10 -30 mm increments 2 mm
- 78.2.HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 18 -30 mm increments 2 mm
- 78.3.HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 10 -30 mm increments 2 mm
- 78.4.HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm
- 78.5.HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 14 -40 mm increments 2 mm
- 78.6.HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm
- 78.7.HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm
- 78.8.HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm

- 78.12. HBQ03, 5,5 мм короткая/длинная резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм, 65 мм, 70 мм
- 78.13. HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 65 мм, 70 мм
- 78.14. HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 20 -125 мм с шагом 5 мм
- 78.15. HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 30 -125 мм с шагом 5 мм
- 78.16. HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм
- 78.17. HBQ03, 7,0 мм/7,5 мм, короткая/длинная резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм
- 78.18. HBQ03, 8,0 мм, короткая/длинная/полная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм
- 78.19. HAQ06, 4,5 мм, спонгиозный, длина: 16 мм, 24 мм, 32 мм
- 78.20. нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 40-95 мм с шагом 5 мм
79. Шайба HAQ 02 диаметр 6,5, 7,0, 10,0, 13,0 мм
80. Винт канюлированный Херберта:
- 80.1. HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм
- 80.2. HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм
- 80.3. HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм
- 80.4. HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм

- 78.9.HBQ03, 4.0 mm, short/long thread, length: 18 -50 mm increments 2 mm
- 78.10. HBQ03, 4.5 mm, short/long thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm
- 78.11. HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm
- 78.12. HBQ03, 5.5 mm, short/long thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 mm. 70 mm
- 78.13. HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 mm. 70 mm
- 78.14. HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 20 -125 mm increments 5 mm
- 78.15. HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm
- 78.16. HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm
- 78.17. HBQ03, 7.0 mm/7.5 mm, short/long thread, length: 30 -135 mm increments 5 mm
- 78.18. HBQ03, 8.0 mm, short/long/ fully thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm
- 78.19. HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 16 mm, 24 mm, 32 mm
- 78.20. NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 40-95 mm increments 5 mm
79. Washer HAQ 02, diameter 6.5, 7.0, 10.0, 13.0 mm
80. Screw Cannulated Herbert:
- 80.1.HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 10 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm
- 80.2.HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 16-29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm
- 80.3.HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 10 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm
- 80.4.HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 16 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm
- 80.5.HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 10 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

80.5. HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм 80.6. HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм 80.7. HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 16-60 мм с шагом 2 мм, 64-72 мм с шагом 4 мм 80.8. HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 64-72 мм с шагом 4 мм 81. Болт Уэбба HAQ 06, 5,0мм, длина: 40 -100 мм с шагом 5 мм 82. Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 13 X 11 мм, 13 X 13 мм, 13 X 17 мм, 15 X 11 мм, 15 X 13 мм, 15 X 15 мм, 20 X 15 мм, 20 X 20 мм, 20 X 25 мм, 25 X 20 мм 83. Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,0 X 11 мм, 2,0 x 12 мм, 2,0 x 14 мм, 2,5 X 11 мм, 2,5 X 13 мм, 2,5 X 15 мм, 2,5 X 17 мм, 2,7 X 13 мм, 2,7 X 15 мм, 2,7 X 17 мм, 2,7 X 19 мм 84. Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 50-120 мм с шагом 5 мм 85. Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги HAQ 06, размер 2.8 X 9 мм, 2.8 X 9 мм, 2.0 X 13 мм, 2.0 X 13 мм, 2,4 X 16 мм, 2,4 X 16 мм, 3.2 X 16 мм, 3.2 X 16 мм, 4.0 X 16 мм, 4.0 X 16 мм, угол: 0°, 10°	80.6.HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 16 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm 80.7.HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 16 -60 mm increments 2 mm, 64 -72 mm increments 4 mm 80.8.HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 64 -72 mm increments 4 mm 81. Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 40 -100 mm increments 5 mm 82. Staples Compression HAQ 06, size 13 X 11 mm, 13 X 13 mm, 13 X 17 mm, 15 X 11 mm, 15 X 13 mm, 15 X 15 mm, 20 X 15 mm, 20 X 20 mm, 20 X 25 mm, 25 X 20 mm 83. Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.0 X 11 mm, 2,0 x 12 mm, 2,0 x 14 mm, 2.5 X 11 mm, 2.5 X 13 mm, 2.5 X 15 mm, 2.5 X 17 mm, 2.7 X 13 mm, 2.7 X 15 mm, 2.7 X 17 mm, 2.7 X 19 mm 84. Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 50 -120 mm increments 5 mm 85. Screw Fixation for Hammertoe HAQ 06, size: 2.8 X 9 mm, 2.8 X 9 mm, 2.0 X 13 mm, 2.0 X 13 mm, 2,4 X 16 mm, 2,4 X 16 mm, 3.2 X 16 mm, 3.2 X 16 mm, 4.0 X 16 mm, 4.0 X 16 mm, angle: 0°, 10°
Далее по тексту могут использоваться следующие наименования медицинского изделия: пластины, винты, изделие, медицинское изделие (МИ), имплантаты. Наименования медицинских изделий могут быть упомянуты в тексте в сокращенной форме для удобства восприятия информации.	Further in the text the following names of the medical device can be used: plates, screws, device, medical device (MD), implants. The medical devices names can be mentioned in the text in abbreviated form for information perception convenience.
Классификация МИ Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий: 2б.	MD classification The class, depending on the degree of potential risk of medical use in according to the nomenclature classifier of medical devices: 2b.
1 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	1. INTENDED USE OF MD

Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho предназначены для внутрикостной фиксации при трещинах, остеотомии (рассечении кости) и несрастании переломов.	Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho are intended for use in the internal fixation of fractures, osteotomies and non-unions.
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ Показания и противопоказания Показания	INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR MD USE AND POSSIBLE ADVERSE EFFECTS Indications and contraindications Indications
Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho могут использоваться медицинскими работниками для фиксации переломов мелких и длинных костей, остеотомии и несрастаний у взрослых или детей. Показания к применению включают внутреннюю фиксацию различных мелких и крупных костей, в том числе большеберцовой кости, малоберцовой кости, бедренной кости, плечевой кости, локтевой кости, лучевой кости, вертлужной впадины, тазовой кости, ключицы, челюстно-лицевой и черепно-лицевой области, пяточной кости, костей кисти, запястья, стопы и голеностопного сустава.	Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho should be used by medical professionals for use in adult or pediatric patients for small and long bone fracture fixation, osteotomies and non-unions. Indications for use include internal fixation of the various small and large bones including tibia, fibula, femur, humerus, ulna, radius, acetabulum, pelvis, clavicle, maxillofacial, craniofacial, calcaneus, bones in hand, wrist, foot and ankle.
Противопоказания Если подозревается любое из следующего, соответствующие тесты должны быть выполнены до имплантации. Противопоказания включают, но не ограничиваются следующими: 1. Физические условия, которые могут помешать адекватной поддержке имплантата или замедлению заживления, такие как нарушение кровоснабжения, недостаточное качество или количество кости, перенесенная инфекция, сепсис, ожирение, чрезмерный изгиб или макроскопические изменения в бедренной кости. 2. Чувствительность к инородному телу – при подозрении на чувствительность к применяемым материалам необходимо провести соответствующие тесты и исключить чувствительность до имплантации. 3. Случаи, когда пациенты не желают или не могут следовать инструкциям по послеоперационному уходу. 4. Случаи, когда имплантат пересекает эпифизарные пластинки пациентов, не достигших скелетной зрелости. 5. Случаи злокачественных первичных или метастатических опухолей, которые препятствуют адекватной костной поддержке или винтовой	Contraindications If any of the following are suspected, tests are to be performed prior to implantation. Contraindications include, but are not limited to: 1. Physical conditions that would preclude adequate implant support or retard healing, such as, blood supply impairment, insufficient bone quality or quantity, previous infection, sepsis, obesity, severe bow or gross distortion of the femur. 2. Foreign body sensitivity - where material sensitivity is suspected, appropriate tests should be made and sensitivity ruled out prior to implantations. 3. Patients who are unwilling or incapable of following post-operative care instructions. 4. Cases where the implant(s) would cross open epiphyseal plates in skeletally immature patients. 5. Cases with malignant primary or metastatic tumors which preclude adequate bone support or screw fixations, unless supplemental fixation or stabilization methods are utilized.

фиксация, если не используются дополнительные методы фиксации или стабилизации.	
Возможные нежелательные явления Включая, но не ограничиваясь следующими: 1. Разрыхление, изгиб, трещина или перелом имплантата, либо ослабление фиксации в кости, вызванное несращением, остеопорозом, нестабильными осколочными переломами. 2. Потеря анатомического положения с характерным несращением или сращением с вращением или искривлением. 3. Боль, дискомфорт или неприятные ощущения из-за наличия имплантата. 4. Снижение плотности костей по причине адаптивной перестройки организма. 5. Ответная реакция на инородное тело (аллергия): на имплантаты, осколки, продукты коррозии, материал трансплантата, включая металлоз, окрашивание, образование опухолей и/или аутоиммунные заболевания. 6. Инфекции, как глубокие, так и поверхностные. 7. Давление на кожу со стороны компонентов имплантата у пациентов с недостаточным покрытием ткани над имплантатом, что может вызвать прокалывание кожи, раздражение и/или боль. 8. Бурсит и повреждение тканей, вызванные неправильным расположением и установкой имплантатов или инструментов. 9. Потеря неврологической функции, включая дизестезию, гиперестезию, анестезию, парестезию, появление радикулопатии, паралич (полный или неполный) и/или развитие или продолжающееся ощущение боли, онемения, невромы или покалывания. 10. Кровоизлияние, гематома, серома, эмболия, отек, инсульт, чрезмерное кровотечение, флебит, некроз раны, раневое расслоение или повреждение кровеносных сосудов. 11. Помехи при рентгенографии, компьютерной томографии и/или МРТ из-за наличия имплантатов.	Potential Adverse Events Include but are not limited to: 1. Loosening, bending, cracking or fracture of the implant or loss fixation in bone attributable to nonunion, osteoporosis, markedly unstable comminuted fractures. 2. Loss of anatomic position with nonunion or malunion with rotation or angulation. 3. Pain, discomfort, or abnormal sensations due to the presence of the device. 4. Decrease in bone density due to stress shielding. 5. Foreign body (allergic) reaction to implants, debris, corrosion products, graft material, including metallosis, staining, tumor formation, and/or auto-immune disease. 6. Infections, both deep and superficial. 7. Pressure on the skin from component parts in patients with inadequate tissue coverage over the implant possibly causing skin penetration, irritation, and/or pain. 8. Bursitis and tissue damage caused by improper positioning and placement of implants or instruments. 9. Loss of neurological function, including dysesthesias, hyperesthesia, anesthesia, paraesthesia, appearance of radiculopathy, paralysis (complete or incomplete), and/or the development or continuation of pain, numbness, neuroma, or tingling sensation. 10. Hemorrhage, hematoma, seroma, embolism, edema, stroke, excessive bleeding, phlebitis, wound necrosis, wound dehiscence, or damage to blood vessels. 11. Interference with roentgenographic, CT, and/or MR imaging because of the presence of the implants.

Примечание: может потребоваться дополнительная операция для нейтрализации некоторых из этих предполагаемых побочных эффектов.

Note: Additional surgery may be necessary to correct some of these anticipates adverse events.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МИ И УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Указания по использованию

Изделия предназначены для использования в учреждениях здравоохранения.
Изделия рекомендуется использовать при условиях, указанных в ниже.

Условия окружающей среды	
Влажность	от 45 % до 55 %
Температура	от +24°C до +26 °C
Давление	Не применимо
Условия эксплуатации после имплантации	
Влажность	до 100 %
Температура	от +32°C до +42 °C
Давление	Не применимо

Потенциальные потребители МИ

Имплантация должна выполняться опытным и квалифицированным врачом-травматологом, поскольку это сложная процедура, представляющая риск нанесения пациенту серьезной травмы.

INFORMATION ON POTENTIAL USERS OF MD AND DIRECTIONS FOR USE

Directions for use

Devices are intended for use in healthcare facilities.
Devices are recommended for use under operation conditions indicated below.

Environmental conditions	
Humidity	45 % to 55 %
Temperature	+24 °C to +26 °C
Pressure	Not applicable
Environmental conditions after implantation	
Humidity	up to 100 %
Temperature	+32 °C to +42 °C
Pressure	Not applicable

Potential users of MD


The implantation must be used by experienced traumatic physician who hold relevant qualifications, because this is a technically demanding procedure presenting a risk of serious injury to the patient.

Принцип действия Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho используются для внутрикостной фиксации при переломах, остеотомии и несрастании переломов. Эти изделия обеспечивают предполагаемое воздействие, ограничивая движение костей в месте перелома. Иммобилизация места перелома сохраняется до тех пор, пока не образуется костное срастание. Таким образом, изделие обеспечивает предполагаемое воздействие физическими средствами. Изделия не обеспечивают предполагаемого воздействия на организм человека посредством фармакологических, иммунологических или метаболических средств. Пластины изготавливаются из нержавеющей стали и нелегированного титана. Винты изготавливаются из нержавеющей стали и титанового сплава. Импланты поставляются в нестерильном состоянии и предназначены только для одноразового применения.	Principle of operation Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho are used in the internal fixation of fractures, osteotomies and non-unions. These devices achieve its intended action by restricting the movement of bones at the fracture site. Immobilization of the fracture site is maintained until bone union is established. Thus, device achieves its intended action by physical means. It does not achieve its principal intended action in or on the human body by pharmacological, immunological or metabolic means Plates are made up of Stainless Steel and Unalloyed Titanium. Screws are made up of Stainless Steel and Titanium Alloy. Implants are provided non-sterile and these are for single use only.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИ Общее описание функциональных элементов МИ Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho состоят из пластин и винтов различных размеров, используемых для временной фиксации, коррекции или стабилизации костей в различных анатомических областях. Пластины изготавливаются в разных длинах и размерах из нелегированного титана, соответствующего требованиям стандарта ISO 5832-2, и нержавеющей стали, соответствующей требованиям стандарта ISO 5832-1. Винты изготавливаются в разных диаметрах и длинах из титанового сплава, соответствующего требованиям стандарта ISO 5832-3, и нержавеющей стали, соответствующей требованиям стандарта ISO 5832-1. Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho поставляются в нестерильном состоянии и предназначена только для одноразового использования.	DESCRIPTION OF MAIN FUNCTIONAL ELEMENTS OF MD General description of functional elements of MD Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho consist of various size plates and screws used for temporary fixation, correction or stabilization of bones in various anatomical regions. The plates are offered in different lengths and sizes; and are made up of unalloyed titanium which meets the requirements of ISO 5832-2 and stainless steel which meets the requirements of ISO 5832-1. The screws are offered in different diameters and lengths; and are made up of titanium alloy which meets the requirements of ISO 5832-3 and stainless steel which meets the requirements of ISO 5832-1. Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho are provided non-sterile for single use only.
Возможность и методы интеграции с другими медицинскими изделиями Материал, из которого изготовлены изделия, указывается на маркировке. К совместному использованию допускаются только компоненты, изготовленные из одного и того же материала. Запрещается использовать	The possibility and ways of integrating with other medical devices The component material is provided on the label. Use the components made up of the same material together. Different metal types should not be used together. Stainless Steel Screws should be used with Stainless

компоненты, изготовленные из разных металлов. Винты из нержавеющей стали должны использоваться только совместно с пластинами из нержавеющей стали, а титановые винты должны использоваться только совместно с титановыми пластинами. Запрещается совместно использовать компоненты от разных производителей, кроме тех случаев, когда это рекомендуется производителем. Для выполнения хирургической процедуры по установке имплантатов необходимы ортопедические инструменты (класса А).	Steel Plates and Titanium Screws with Titanium Plates. Components from different Manufacturers must not be mixed, except when advised by the manufacturer. Orthopedic instruments (Class A) are required to perform the surgical procedure to fix the implants.
Технические характеристики МИ	Technical characteristics of MD
*В таблицах технических характеристик указаны фактические параметры МИ. Указанные в наименовании МИ параметры являются частью наименования и представлены для удобства выбора пользователем конкретного изделия. Используемые сокращения: Т- изделие из Титана, S – изделие из Нержавеющей стали. *The table of technical characteristics contains the actual parameters of the MD. The parameters specified in the MD name are part of the name and presented for the convenience of the user's choice of a particular product. Abbreviations: T - titanium product, S-Stainless steel product.	

Пластина фиксирующая / Plate Locking


Пластина фиксирующая ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-7 с шагом 1 / Plate Locking clavicle with Hook JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-7 increments 1

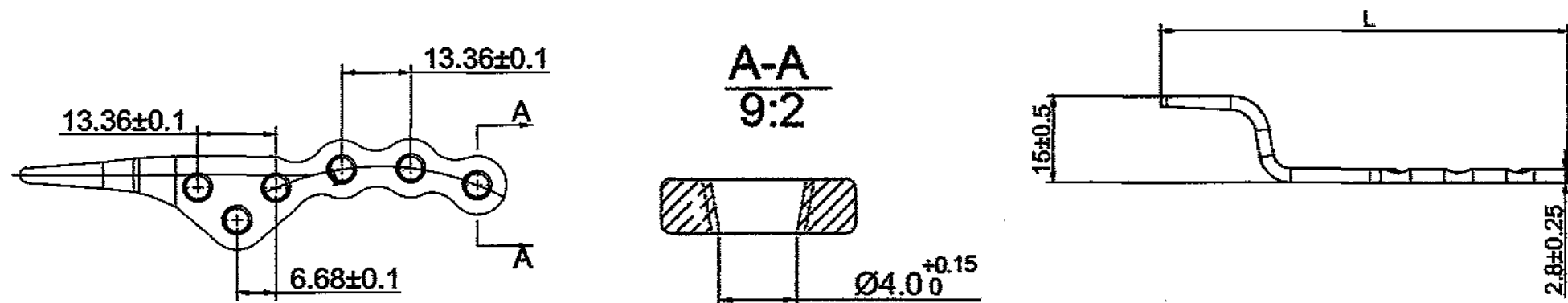

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Высота пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate height with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,8 ± 0,25	15 ± 0,5	4 ^{+0,15} ₀	6,68 ± 0,1 13,36 ± 0,1	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking clavicle with Hook JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	61	4	T: 4,61 ±20% S: 8,04 ±20%
Plate Locking clavicle with Hook JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 5	72	5	T: 5,44 ±20% S: 9,49 ±20%
Plate Locking clavicle with Hook JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	83	6	T: 6,27 ±20% S: 10,95 ±20%
Plate Locking clavicle with Hook JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 7	94	7	T: 7,11 ±20% S: 12,39 ±20%

Пластина фиксирующая для стабилизации вертела, под динамический бедренный винт, JZQ 07, отверстия 4 / Plate Locking Trochanter Stabilizing, for DHS, JZQ 07, Holes 4

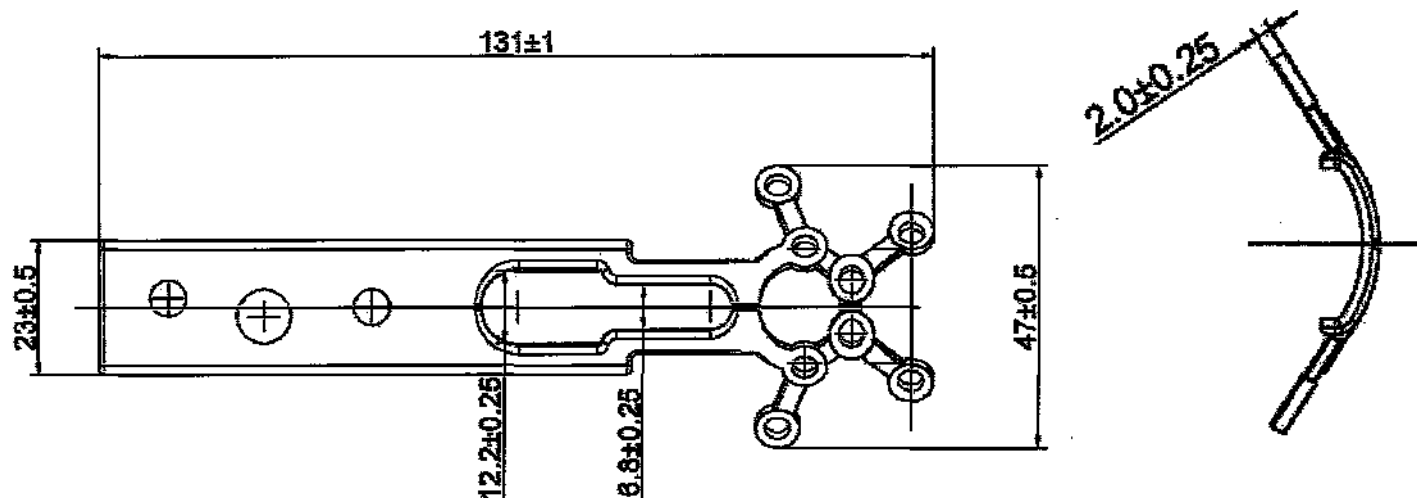


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate head width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	131 ± 1	23 ± 0,5	47 ± 0,5	4	T: 26,41 ± 20% S: 46,07 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 / Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Высота пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate height with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
5 ± 0,25	16,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	136	4	T: 49 ±20% S: 86 ±20%
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 5	156	5	T: 56 ±20% S: 99 ±20%
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6	176	6	T: 63 ±20% S: 111 ±20%
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 7	196	7	T: 70 ±20% S: 123 ±20%
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 9	236	9	T: 85 ±20% S: 150 ±20%
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 11	276	11	T: 99 ±20% S: 175 ±20%
Plate Locking Distal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 13	Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 13	316	13	T: 113 ±20% S: 200 ±20%

Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1, 12-22 с шагом 2 / Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 5-10 increments 1, 12-22 increments 2

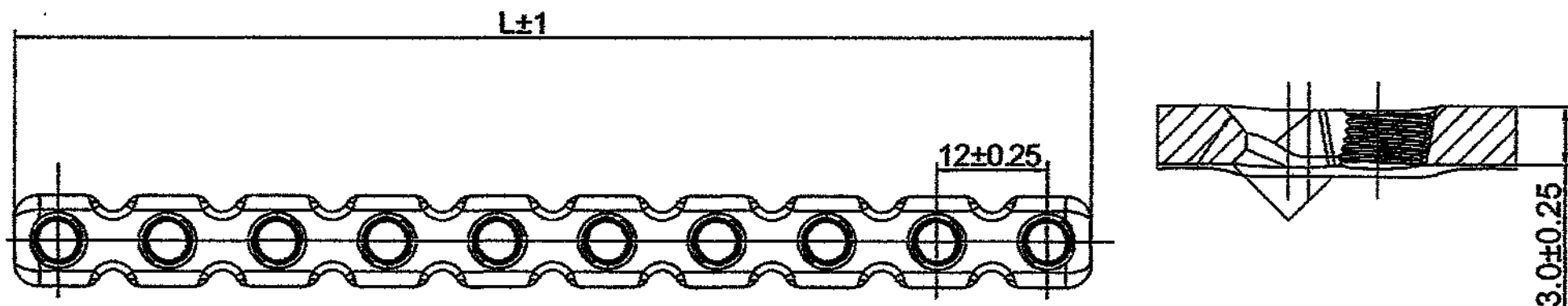


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,0 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±L, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 5	58	5	T: 7,83 ±20% S: 13,66 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 6	70	6	T: 9,45 ±20% S: 16,49 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 7	82	7	T: 11,07 ±20% S: 19,31 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 8	94	8	T: 12,69 ±20% S: 22,14 ±20%

Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 9	106	9	T: 14,31 ±20% S: 24,96 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 10	118	10	T: 15,93 ±20% S: 27,79 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 12	142	12	T: 19,17 ±20% S: 33,44 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 14	166	14	T: 22,41 ±20% S: 39,09 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 16	190	16	T: 25,65 ±20% S: 44,75 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 18	214	18	T: 28,89 ±20% S: 50,4 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 20	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 20	238	20	T: 32,13 ±20% S: 56,05 ±20%
Plate Locking Reconstruction ZSQ 12, size 3.5 mm, holes: 22	Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 22	262	22	T: 35,37 ±20% S: 61,7 ±20%


Пластина фиксирующая симфизарная YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстия: 4, 6 / Plate Locking Symphyseal YSQ 20, size 3.5 mm, holes: 4, 6

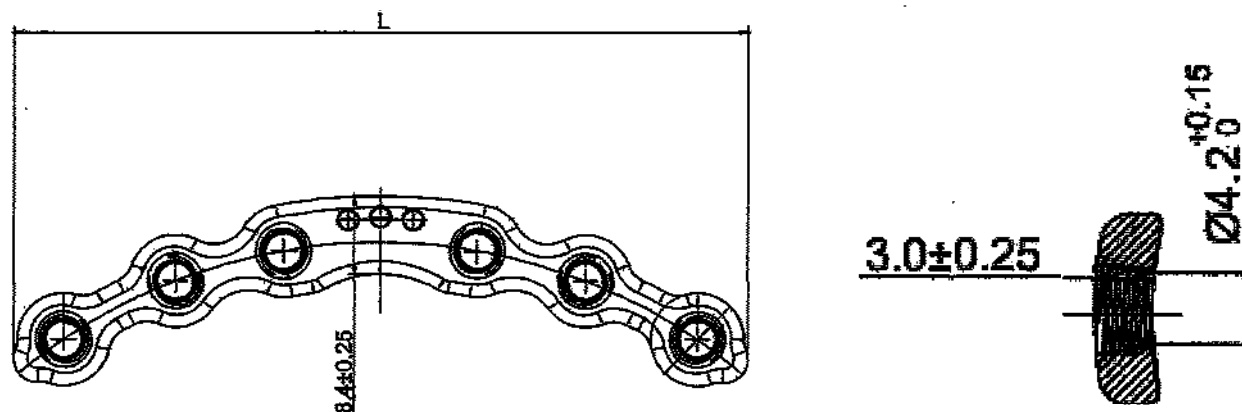

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстий с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	8,4 ± 0,25	0,4 0,8 1,6


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Symphyseal YSQ 20, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая симфизарная YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстия: 4	57	4	T: 7,7 ± 20% S: 13,42 ± 20%
Plate Locking Symphyseal YSQ 20, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая симфизарная YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстия: 6	78	6	T: 10,53 ± 20% S: 18,37 ± 20%

Пластина фиксирующая пяточная, JZQ 06, правая/ левая, 3,5 мм, размер: сверх малая, длина: 64 мм/ Plate Locking Calcaneal, JZQ 06, right/left, 3.5 mm size: extra small, length: 64 mm

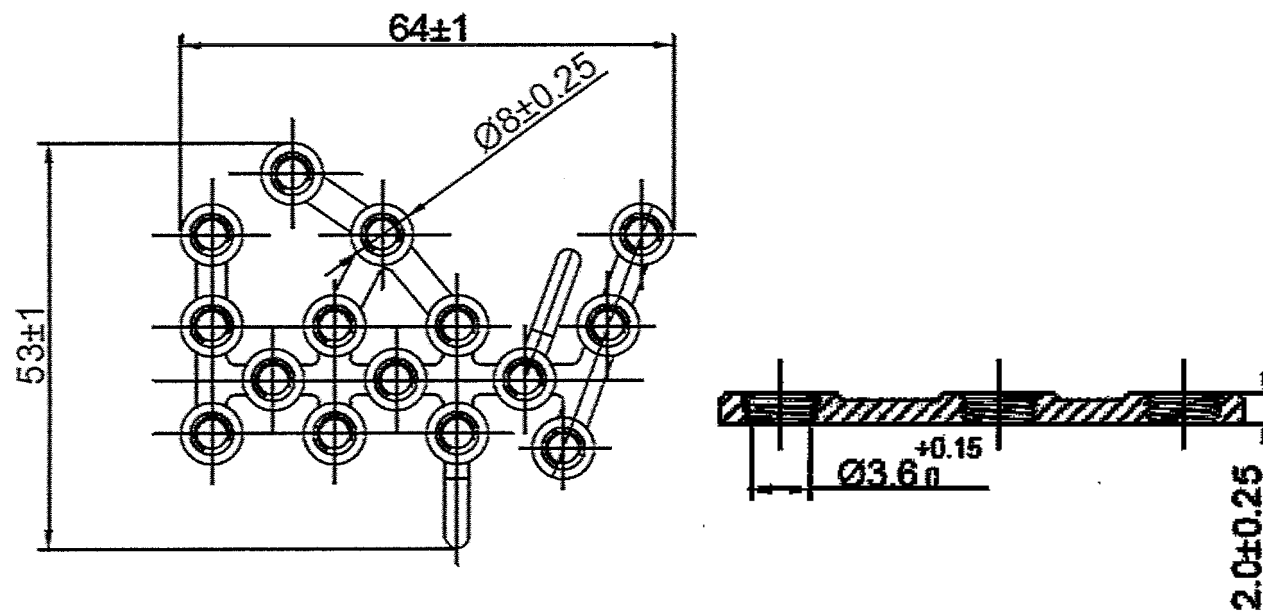


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm , outside/inner/others
2 ± 0,25	64 ± 1	3,6 ₀ ^{+0,15}	8 ± 0,25	53 ± 1	T: 10,18 ± 20% S: 17,75 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая пяточная, JZQ 06, правая/ левая, 3,5 мм, размер: малая, длина: 69 мм / Plate Locking Calcaneal, JZQ 06, right/left, 3.5 mm size: small, length: 69 mm

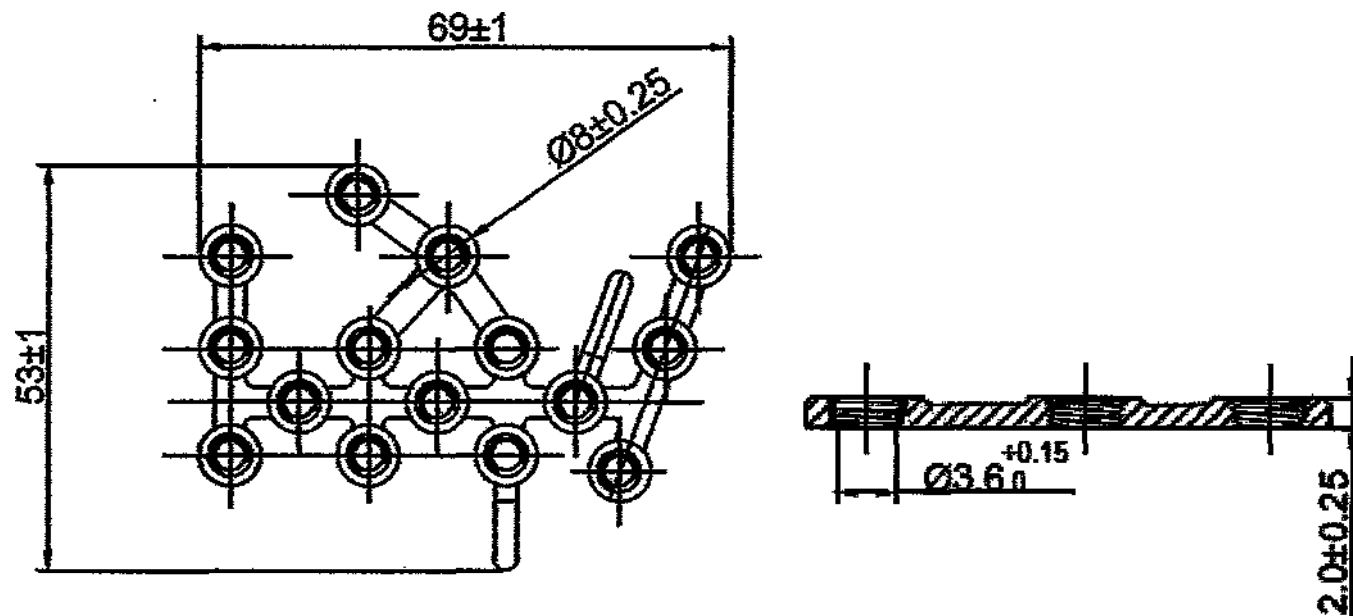


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/други с
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	69 ± 1	3,6 ₀ ^{+0,15}	Ø8 ± 0,25	53 ± 1	T: 10,97 ± 20% S: 19,14 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая пяточная, JZQ 06, правая/ левая, 3,5 мм, размер: крупная, длина: 76 мм / Plate Locking Calcaneal, JZQ 06, right/left, 3.5 mm size: large, length: 76 mm

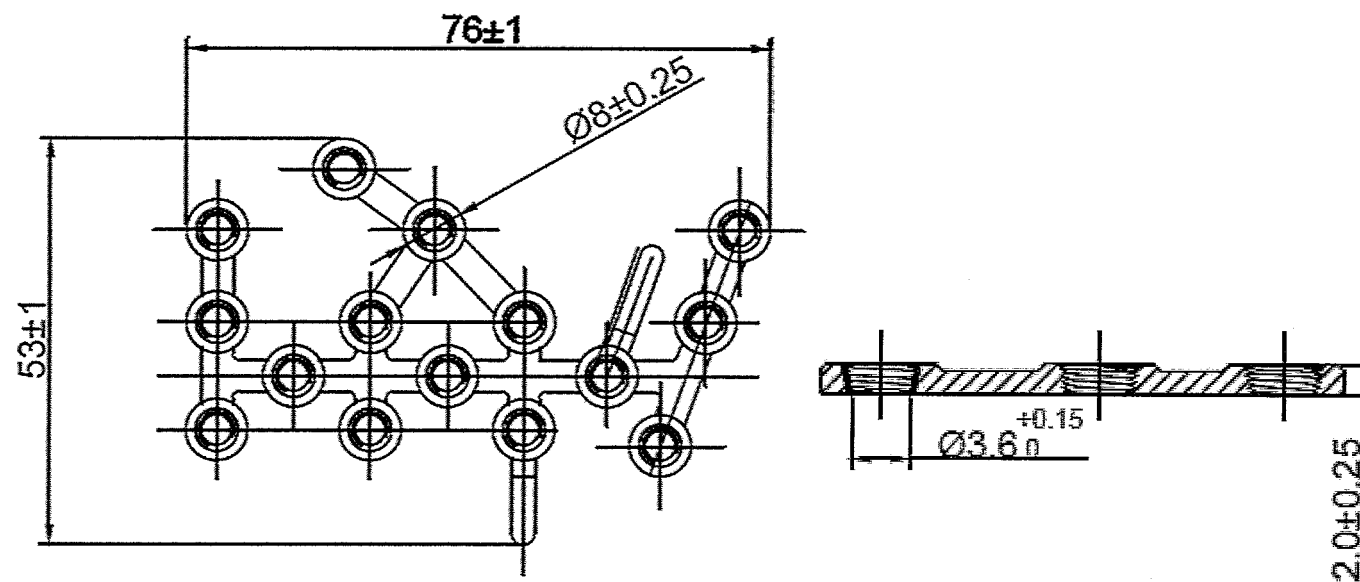


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/други
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	76 ± 1	3,6 ^{+0.15} ₀	Ø8 ± 0,25	53 ± 1	T: 12,08 ± 20% S: 21,08 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая пяточная, JZQ 06, правая/ левая, 3,5 мм, размер: сверх крупная, длина: 81 мм / Plate Locking Calcaneal, JZQ 06, right/left, 3.5 mm size: extra large, length: 81 mm

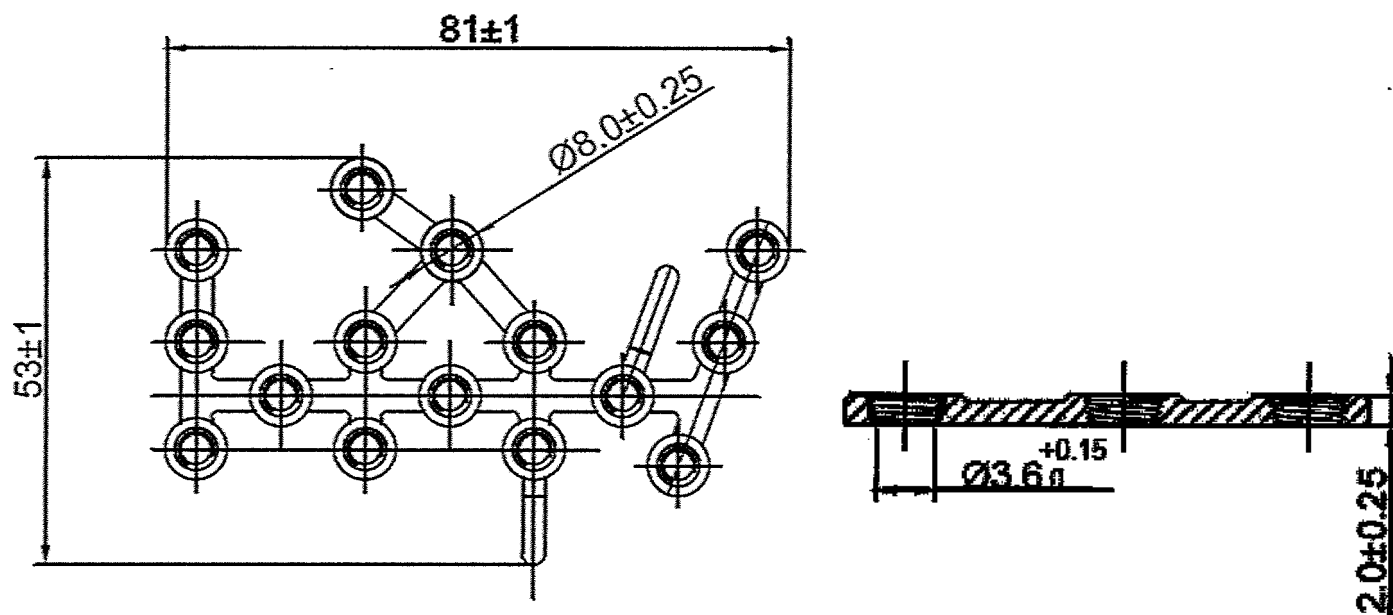


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/други
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	81 ± 1	3,6 ₀ ^{+0,15}	Ø8 ± 0,25	53 ± 1	T: 12,84 ± 20% S: 22,47 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая ладьевидной кости JZQ 07, размер 2,7 мм, отверстия: 11, длина 63 мм / Plate Locking Navicular JZQ 07, size 2.7 mm, holes: 11, length: 63 mm

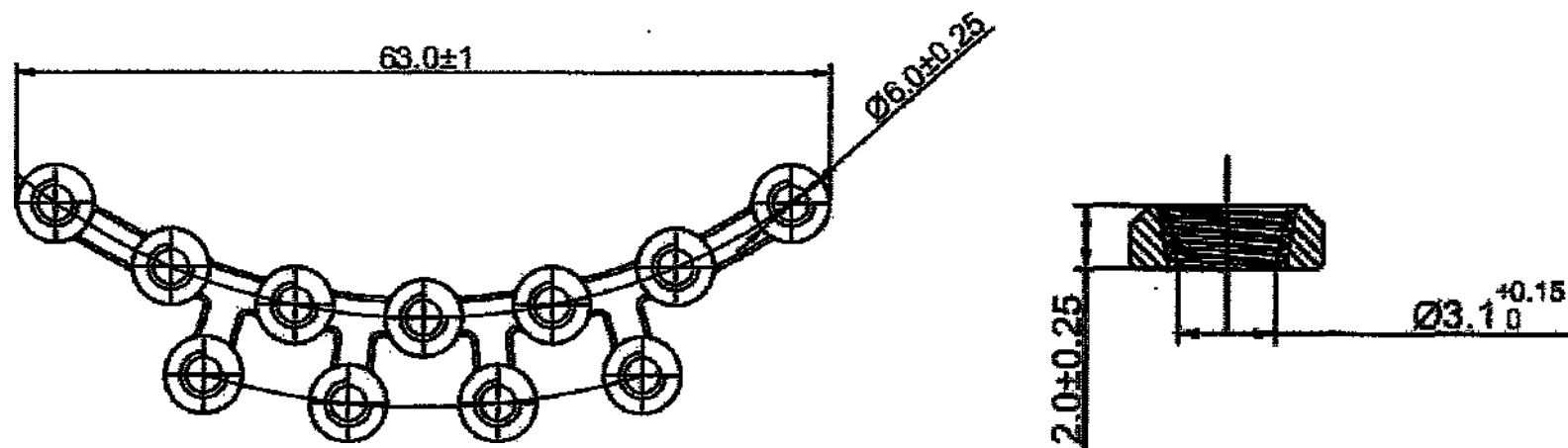


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	63 ± 1	Ø3,1 ₀ ^{+0,15}	Ø6 ± 0,25	11	T: 4,37 ± 20% S: 7,62 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая кубовидной кости JZQ 06, правая/ левая размер 2,7 мм, отверстия: 11 / Plate Locking Cuboid JZQ 06, right/left, size 2.7 mm, holes: 11

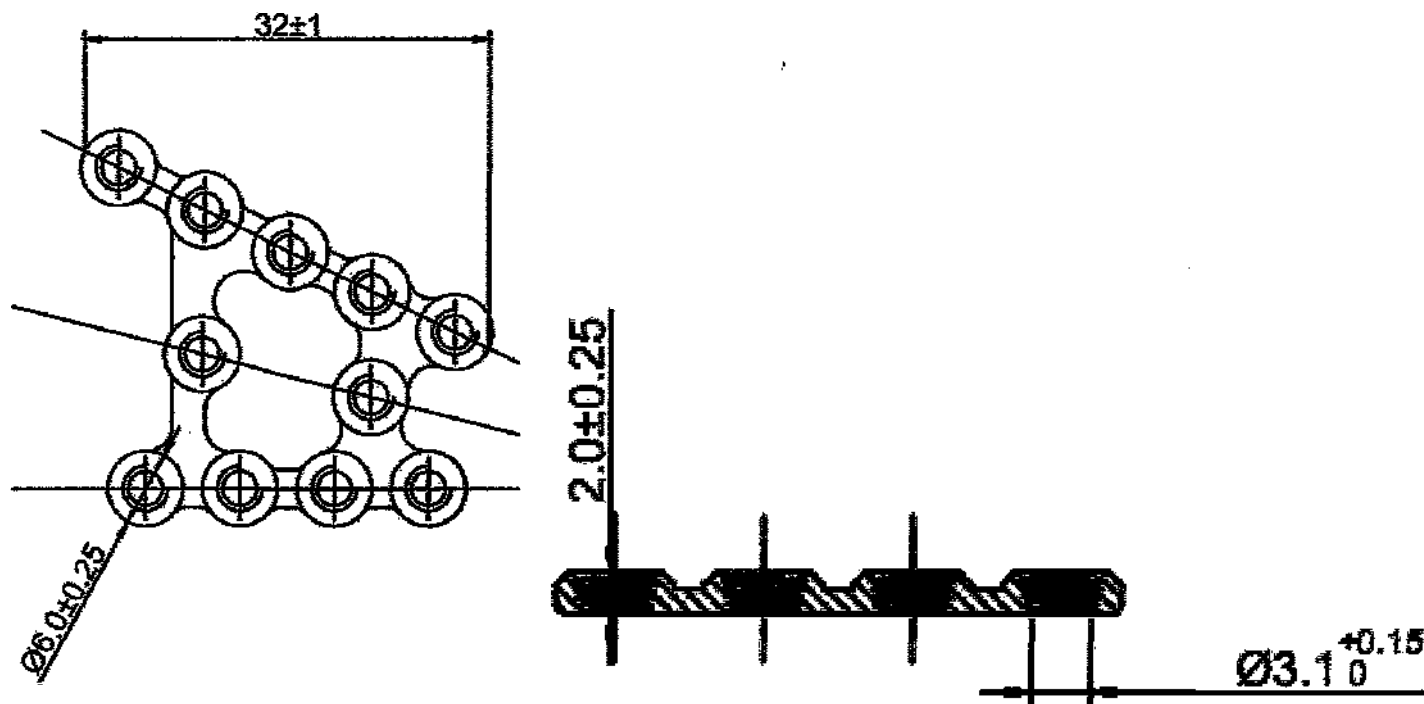


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	32 ± 1	3,1 ₀ ^{+0,15}	6 ± 0,25	11	T: 3,02 ± 20% S: 5,26 ± 20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая таранной кости YSQ 20, размер 2,7 мм, отверстия: 6, длина 44 мм / Plate Locking Talus YSQ 20, size 2.7 mm, holes: 6, length: 44 mm

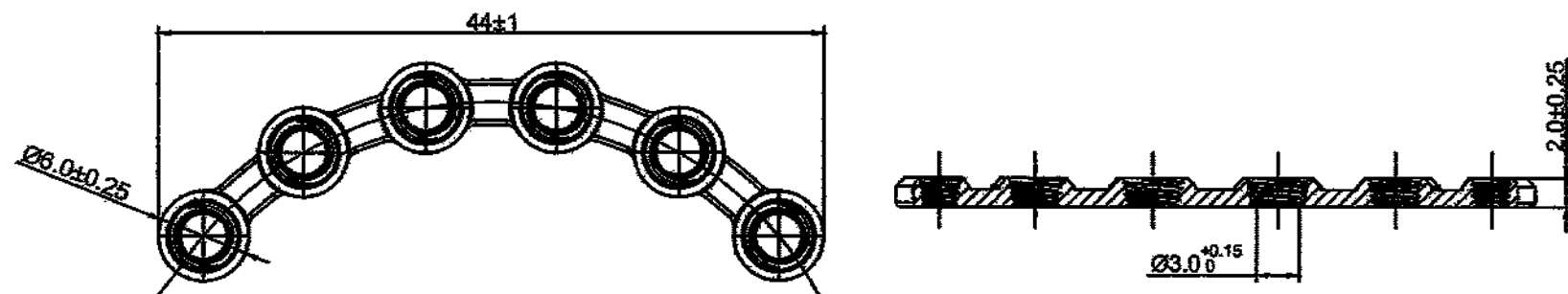


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	44 ± 1	3,0 ^{+0,15} ₀	6 ± 0,25	6	T: 5,78 ± 20% S: 10,09 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая с 2 отверстиями ZEQ 02, размер 2,7 мм, отверстия: 2, длина: 20 мм / Plate Locking with 2 Holes ZEQ 02, size 2.7 mm, holes: 2, length: 20 mm

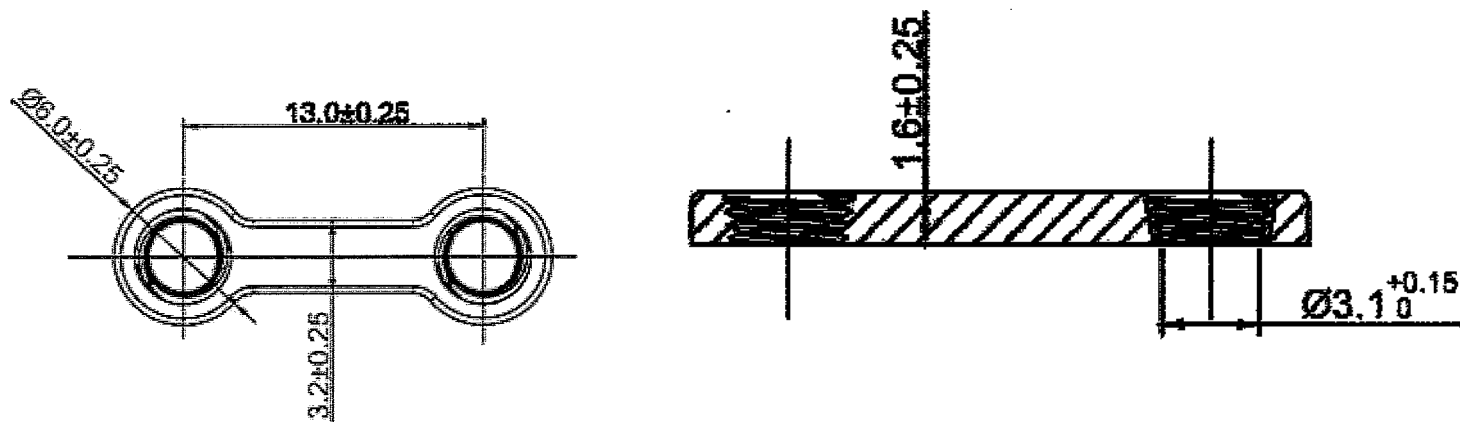


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	External diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
1,6 ± 0,25	3,2 ± 0,25	13 ± 0,25	3,1 ₀ ^{+0,15}	6 ± 0,25	2	T: 0,58 ± 20% S: 1 ± 20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая для заднего и среднего отдела стопы, JZQ 02, размер 2,7 мм, отверстия x длина 5x31 мм, 8x45 мм / Plate Locking Hind and Midfoot JZQ 02, size 2.7 mm, holes x length 5x31 mm, 8x45 mm

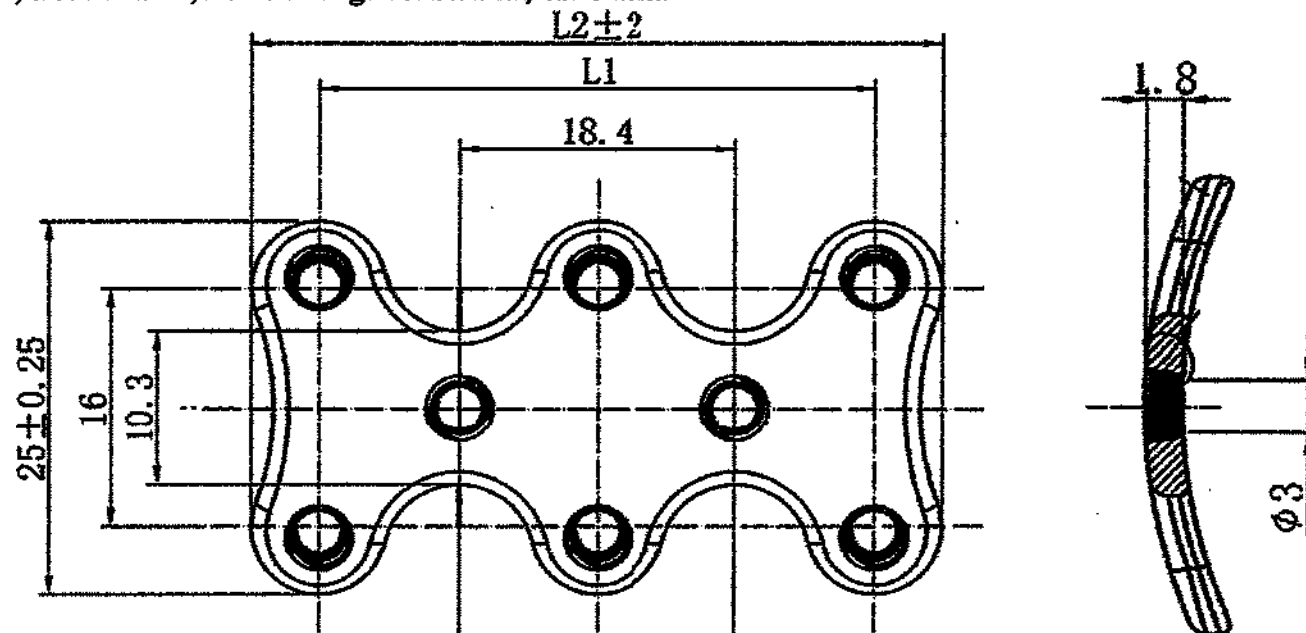

Толщина пластины с погрешностью мм, мм $\pm$ мм	Ширина пластины с погрешностью мм, мм $\pm$ мм	Длина (L2) пластины с погрешностью мм, мм $\pm$ мм	Расстояние между отверстиями с погрешностью мм, мм $\pm$ мм	Диаметр отверстия с погрешностью мм, мм $\pm$ мм	Количество отверстий	Масса с погрешностью мм, г $\pm$ г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate width with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate length (L2) with tolerance, mm $\pm$ mm	Distance between holes with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole diameter with tolerance, mm $\pm$ mm	Number of holes	Mass with tolerances, g $\pm$ g	Roughness, μ m, outside/inner/others
1.8 ± 0.25	25 ± 0.25 10.3 ± 0.25	46 ± 2	(L1) 31 ± 0.25 18.4 ± 0.25 16 ± 0.25	$3_0^{+0.15}$	5	T: $4.46 \pm 20\%$ S: $7.78 \pm 20\%$	0,4 0,8 3,2
1.8 ± 0.25	59 ± 2	25 ± 0.25 10.3 ± 0.25	(L1) 45 ± 0.25 18.4 ± 0.25 16 ± 0.25	$3_0^{+0.15}$	8	T: $6.48 \pm 20\%$ S: $11.3 \pm 20\%$	0,4 0,8 3,2

Пластина фиксирующая переходная ZEQ 03, размер 1,5 мм отверстия: 6, 12 / Plate Locking Adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 6, 12

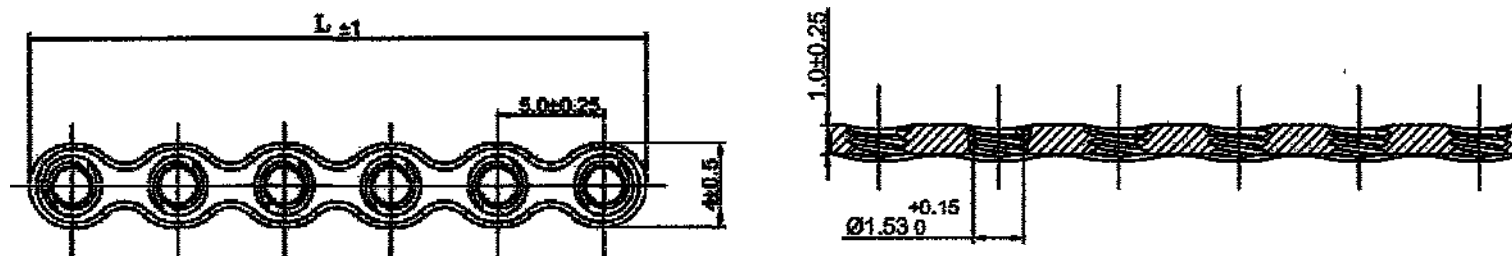

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1 ± 0,25	4 ± 0,5	5 ± 0,25	1,53 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая переходная ZEQ 03, размер 1,5 мм отверстия: 6	29	6	T: 0,63 ± 20% S: 1,09 ± 20%
Plate Locking Adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая переходная ZEQ 03, размер 1,5 мм отверстия: 12	59	12	T: 1,27 ± 20% S: 2,22 ± 20%

Пластина фиксирующая переходная ZEQ 03, размер 1,3 мм, прямая, отверстия: 6, 12 / Plate Locking Adaption ZEQ 03, size 1.3 mm, straight, holes: 6, 12


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Adaption ZEQ 03, size 1.3 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая переходная ZEQ 03, размер 1,3 мм отверстия: 6	43	6	T: 1,72 ±20% S: 3,04 ±20%
Plate Locking Adaption ZEQ 03, size 1.3 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая переходная ZEQ 03, размер 1,3 мм отверстия: 12	86	12	T: 3,48 ±20% S: 6,08 ±20%

Пластина фиксирующая опорная JZQ 06 правая/ левая. размер 1,3 мм, наклонная угловая, отверстий 8 / Plate Locking Strut JZQ 06 right/left, size 1.3 mm, OBLIQUE ANGLED, holes: 8


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	7,95 ± 0,25	21 ± 1	8	T: 0,7 ± 20% S: 1,24 ± 20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая опорная JZQ 06 правая/ левая. размер 1,5 мм, наклонная угловая, отверстий 8 / Plate Locking Strut JZQ 06 right/left, size 1.5 mm, OBLIQUE ANGLED, holes: 8

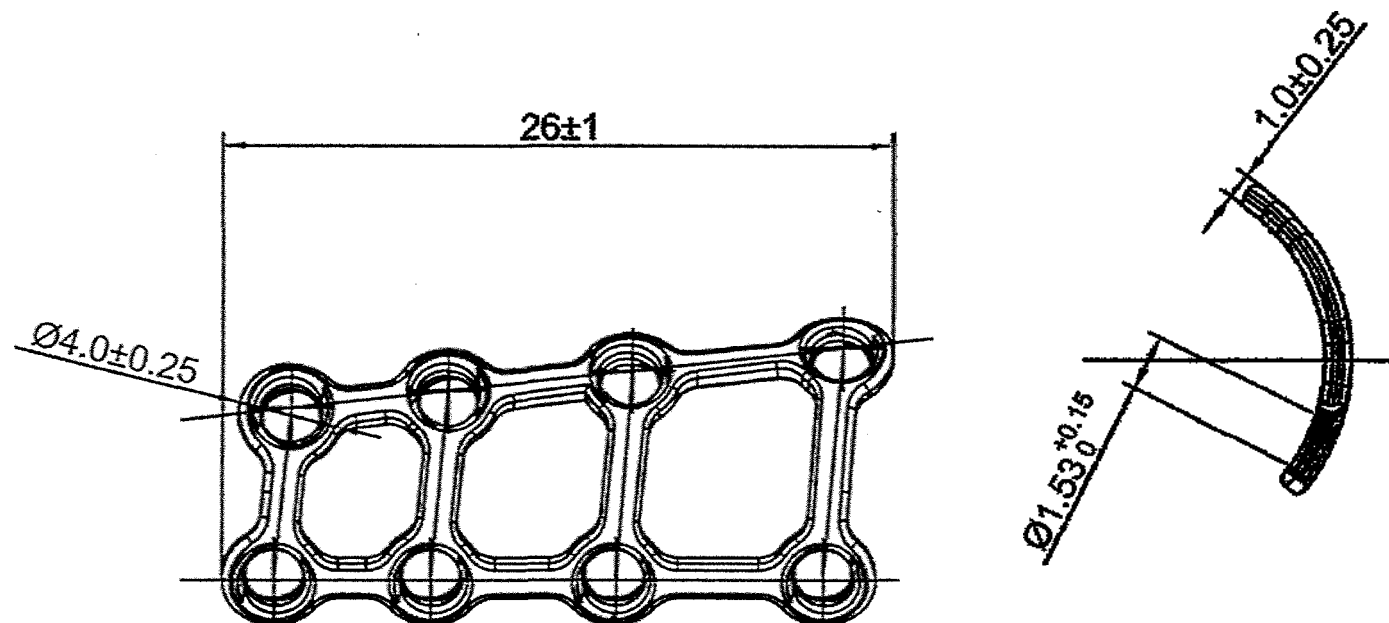

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
26 ± 1	1 ± 0,25	1,53 ₀ ^{+0.15} 4 ± 0,25	8	T: 0,8 ± 20% S: 1,4 ± 20%	0,4 0,8 1,6


Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 4-10 с шагом 1 / Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes: 4-10 increments 1

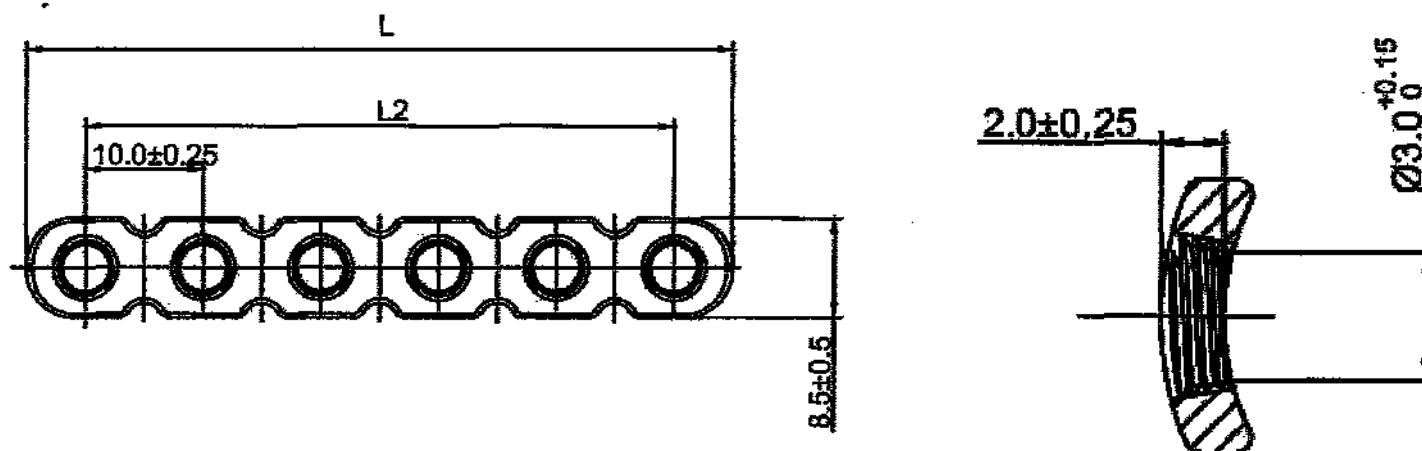

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8,5 ± 0,5	10 ± 0,25	3 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±0,5, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 4	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 4	40	30	4	T: 3,06 ±20% S: 5,34 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 5	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 5	50	40	5	T: 3,83 ±20% S: 6,67 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 6	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 6	60	50	6	T: 4,59 ±20% S: 8,01 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 7	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 7	70	60	7	T: 5,36 ±20% S: 9,34 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 8	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 8	80	70	8	T: 6,12 ±20% S: 10,68 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 9	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 9	90	80	9	T: 6,89 ±20% S: 12,01 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 2.7 mm, holes 10	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия 10	100	90	10	T: 7,65 ±20% S: 13,35 ±20%


Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 5-7 с шагом 1, 8-12 с шагом 2 / Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 5-7 increments 1, 8-12 increment 2

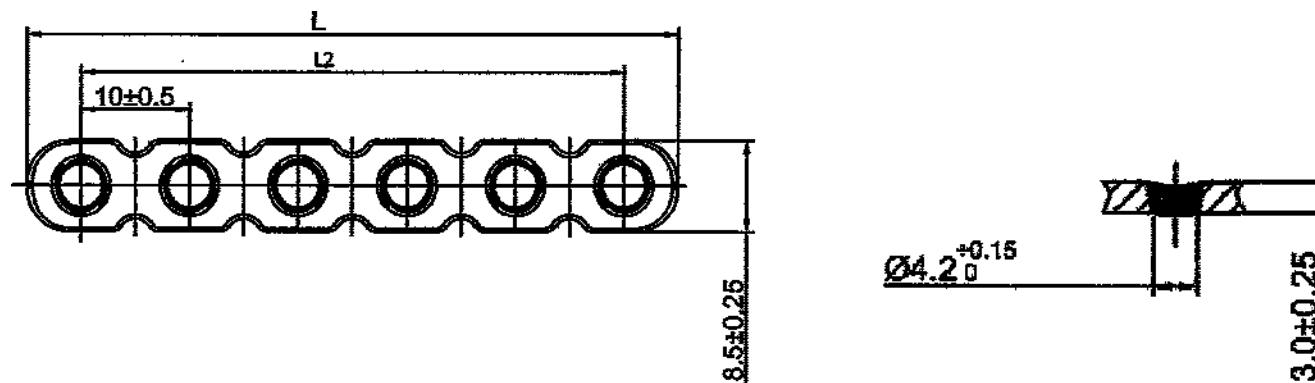

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	8,5 ± 0,25	10 ± 0,5	4,2 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±0,5, мм (mm)	Отверстий (Holes), мм (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 5	50	40	5	T: 5,74 ±20% S: 10,01 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 6	60	50	6	T: 6,89 ±20% S: 12,01 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 7	70	60	7	T: 8,03 ±20% S: 14,01 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 8	80	70	8	T: 9,18 ±20% S: 16,01 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 10	100	90	10	T: 10,33 ±20% S: 18,02 ±20%
Plate Locking Pediatric Reconstruction YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 12	120	110	12	T: 11,48 ±20% S: 20,02 ±20%

Пластина фиксирующая верхняя для ключицы JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4+5 / Plate Locking Superior for Clavicle JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 4 + 5

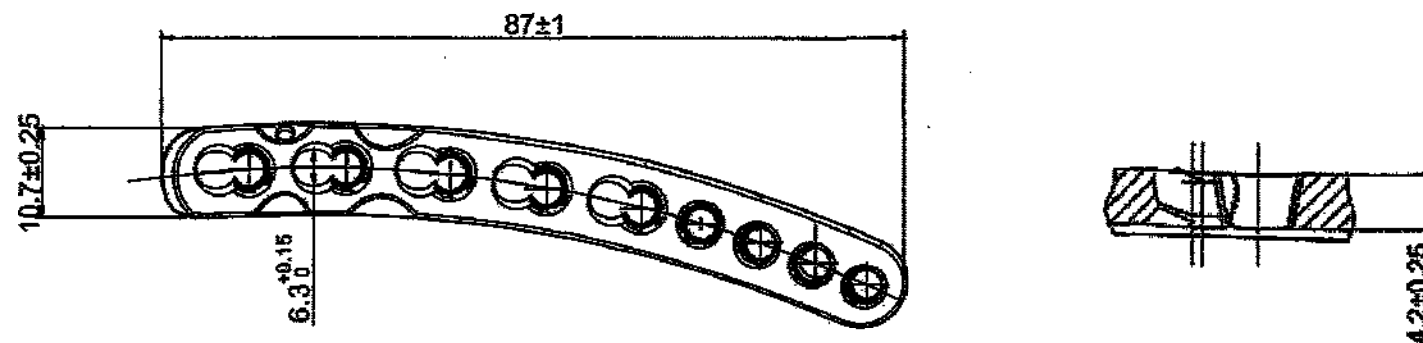

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий с/без динамизации	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes with/without dynamization	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
87 ± 1	4,2 ± 0,25	10,7 ± 0,25	6,3 ^{+0,15} ₀	4 5	T: 17,79 ±20% S: 31,04 ±20%	0,8 1,6 3,2



Пластина фиксирующая восстановительная YSQ 20, изогнутая правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8 / Plate locking Reconstruction YSQ 20, curved, right/left, size 3.5 mm, holes: 6, 7, 8

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	10 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate locking Reconstruction YSQ 20, curved, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая восстановительная YSQ 20, изогнутая правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	67	5	T: 8,5 ±20% S: 15,2 ±20%
Plate locking Reconstruction YSQ 20, curved, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая восстановительная YSQ 20, изогнутая правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	78	6	T: 9,9 ±20% S: 17,7 ±20%
Plate locking Reconstruction YSQ 20, curved, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая восстановительная YSQ 20, изогнутая правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	89	7	T: 11,3 ±20% S: 20,1 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) / Plate Locking compression (LCP)

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12, 15, 18 мм, отверстий 4, 5, 6, 7 / Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 12, 15, 18 mm, Holes 4, 5, 6, 7

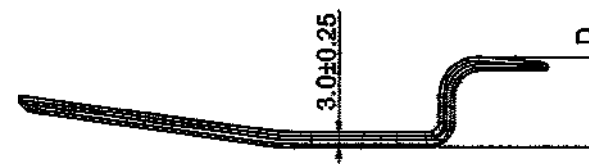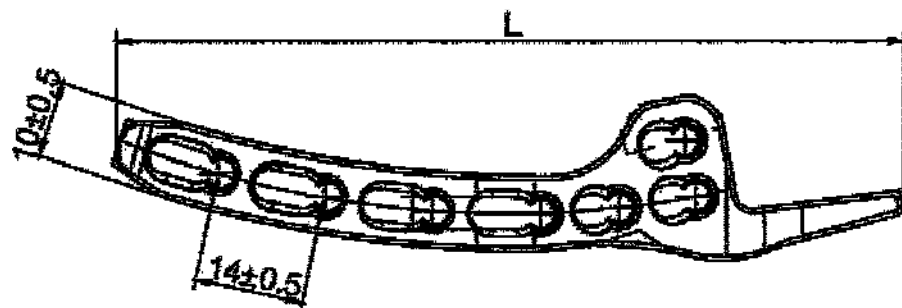


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	10 ± 0,5	14 ± 0,5	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	D ± 0,5 мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 12 mm, Holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12 мм, отверстий 4	60	12	4	T: 8,23 ± 20% S: 14,36 ± 20%

Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 12 mm, Holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12 мм, отверстий 5	74	12	5	T: 10,13 ±20% S: 17,66 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 12 mm, Holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12 мм, отверстий 6	88	12	6	T: 12,02 ±20% S: 20,96 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 12 mm, Holes 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12 мм, отверстий 7	102	15	7	T: 13,9 ±20% S: 24,26 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 15 mm, Holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 15 мм, отверстий 4	60	15	4	T: 8,36 ±20% S: 14,59 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 15 mm, Holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 15 мм, отверстий 5	74	15	5	T: 10,26 ±20% S: 17,89 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 15 mm, Holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 15 мм, отверстий 6	88	15	6	T: 12,15 ±20% S: 21,19 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 15 mm, Holes 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 15 мм, отверстий 7	102	15	7	T: 14,03 ±20% S: 24,49 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 18 mm, Holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 18 мм, отверстий 4	60	18	4	T: 8,49 ±20% S: 14,82 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 18 mm, Holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 18 мм, отверстий 5	74	18	5	T: 10,39 ±20% S: 18,02 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 18 mm, Holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 18 мм, отверстий 6	88	18	6	T: 12,28 ±20% S: 21,42 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Hook for Clavicle JSQ 01 right/left, size 3.5 mm, hook depth: 18 mm, Holes 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 18 мм, отверстий 7	102	18	7	T: 14,16 ±20% S: 24,72 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 / Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

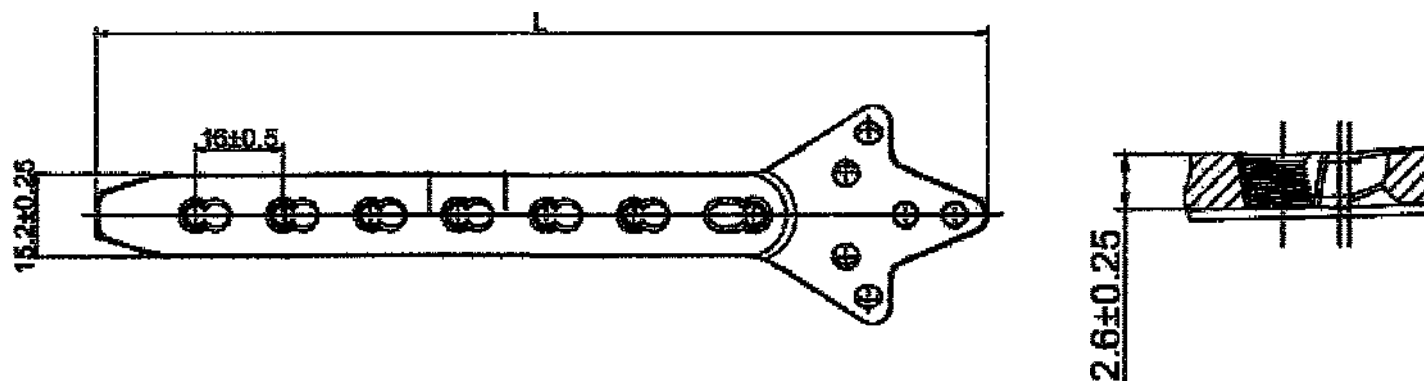

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	15,2 ± 0,25	16 ± 0,5	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L, lot (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 3	99	3	T: 10,99 ±20% S: 19,17 ±20%
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 4	115	4	T: 12,74 ±20% S: 22,22 ±20%
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 5	131	5	T: 14,49 ±20% S: 25,27 ±20%
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 6	147	6	T: 16,24 ±20% S: 28,33 ±20%
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 7	163	7	T: 17,99 ±20% S: 31,38 ±20%
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 8	179	8	T: 19,74 ±20% S: 34,44 ±20%
Plate Locking compression (LCP) in a shape of Cloverleaf YSQ 19, size 3.5 mm, holes 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия 10	211	10	T: 21,49 ±20% S: 37,49 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3-8 с шагом 1 / Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 3-8 increments 1

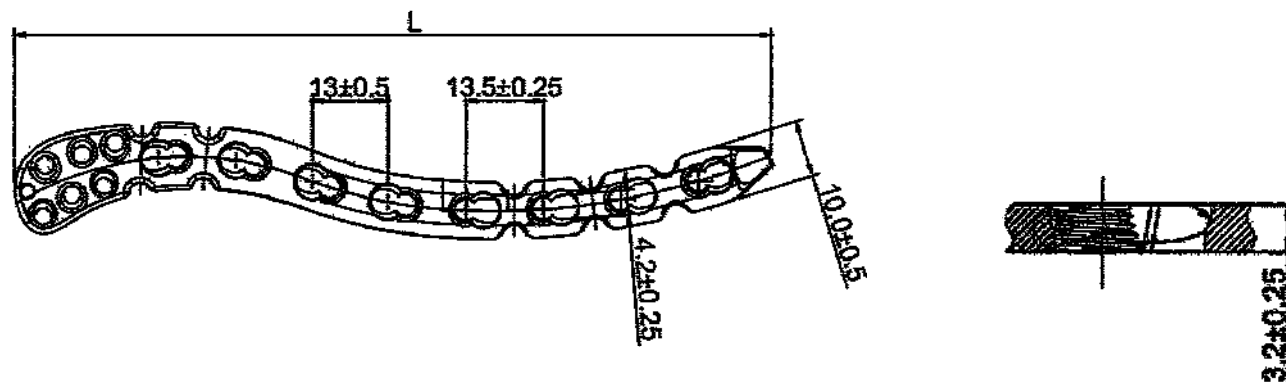


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстий с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мм.
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,2 ± 0,25	10 ± 0,5	13 ± 0,5 13,5 ± 0,25	4,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия 3	69	3	T: 11,18 ± 20% S: 19,5 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия 3	81	4	T: 13,12 ± 20% S: 22,89 ± 20%

Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия 3	94	5	T: 15,23 ±20% S: 26,56 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия 3	106	6	T: 17,17 ±20% S: 29,96 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия 3	123	7	T: 19,93 ±20% S: 34,76 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Superior Anterior Clavicle JZQ 08, with lateral extension, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия 3	135	8	T: 21,87 ±20% S: 38,15 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя для ключицы JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8 / Plate Locking compression (LCP) Superior Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 6, 7, 8

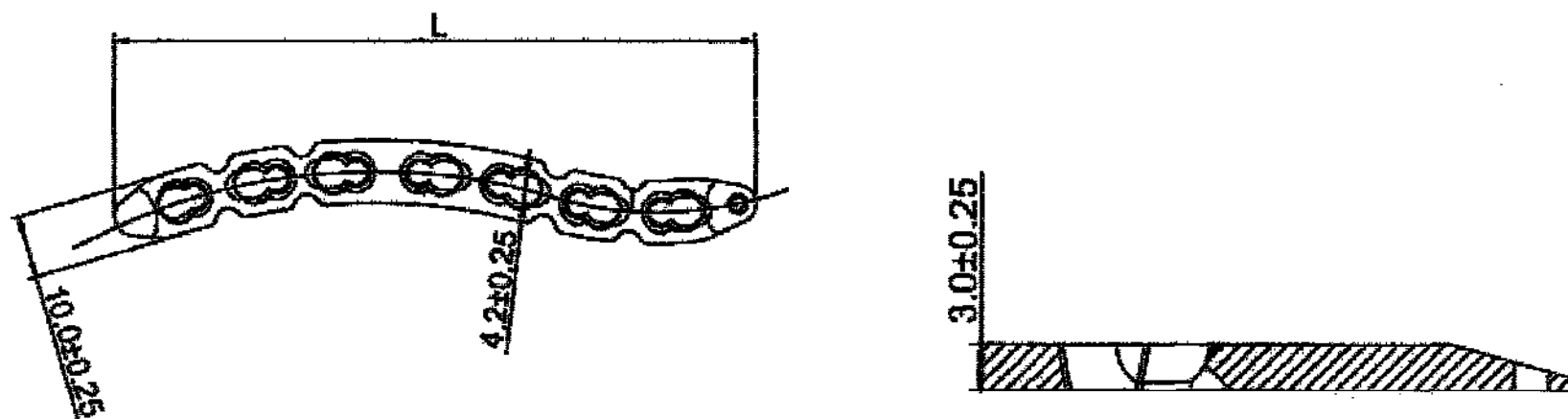

Толщина пластины погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	10 ± 0,25	4,2± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Superior Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	85	6	T: 9,56 ±20% S: 16,68 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Superior Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 7	100	7	T: 11,25 ±20% S: 19,63 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Superior Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	115	8	T: 12,93 ±20% S: 22,57 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 3, 5, 6, 8, 10 / Plate Locking compression (LCP) Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 мм, holes: 3, 5, 6, 8, 10

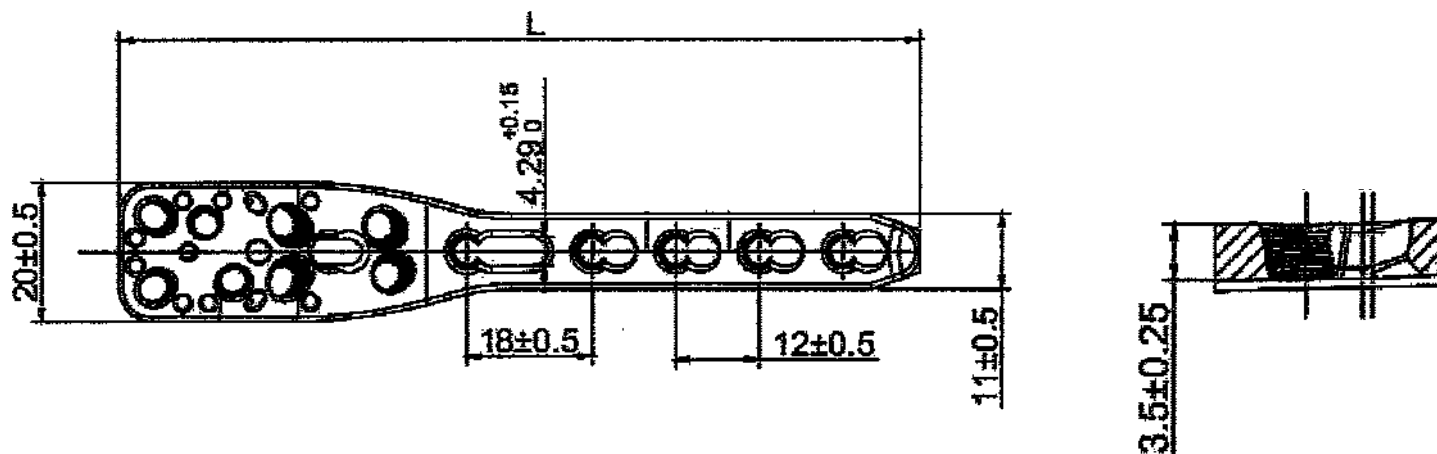

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	11 ± 0,5 20 ± 0,5	12 ± 0,5 18 ± 0,5	4,29 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	Длина, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 3	90	3	T: 15,59 ±20% S: 27,2 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 5	114	5	T: 19,75 ±20% S: 34,45 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 6	160	6	T: 27,72 ±20% S: 48,35 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 8	196	8	T: 33,95 ±20% S: 59,23 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 10	232	10	T: 40,19 ±20% S: 70,12 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная боковая для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 5, 8 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral for Humerus JZQ 04, size 3,5 mm, holes: 5, 8

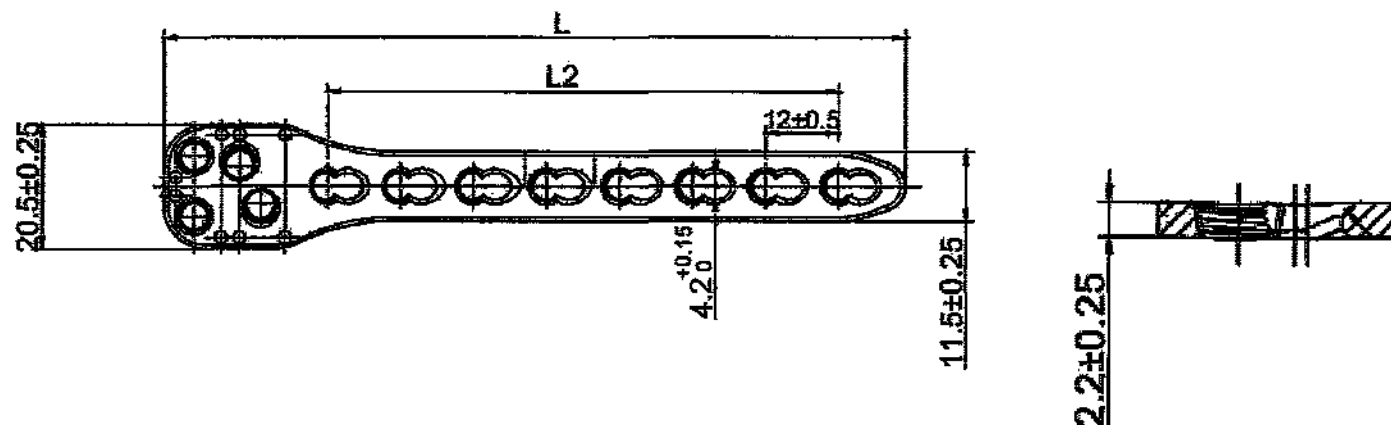

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,2 ± 0,25	11,5 ± 0,25 20,5 ± 0,25	12 ± 0,5	4,2 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±0,5, мм (mm)	Отверстий шт (pcs) (Holes)	Масса погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral for Humerus JZQ 04, size 3,5 мм, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная боковая для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 5	85	48	5	T: 9,68 ±20% S: 16,88 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral for Humerus JZQ 04, size 3,5 мм, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная боковая для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 8	121	84	8	T: 13,77 ±20% S: 24,03 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2-6 с шагом 1, 8-14 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 мм, holes: 2-6 increments 1, 8-14 increments 2

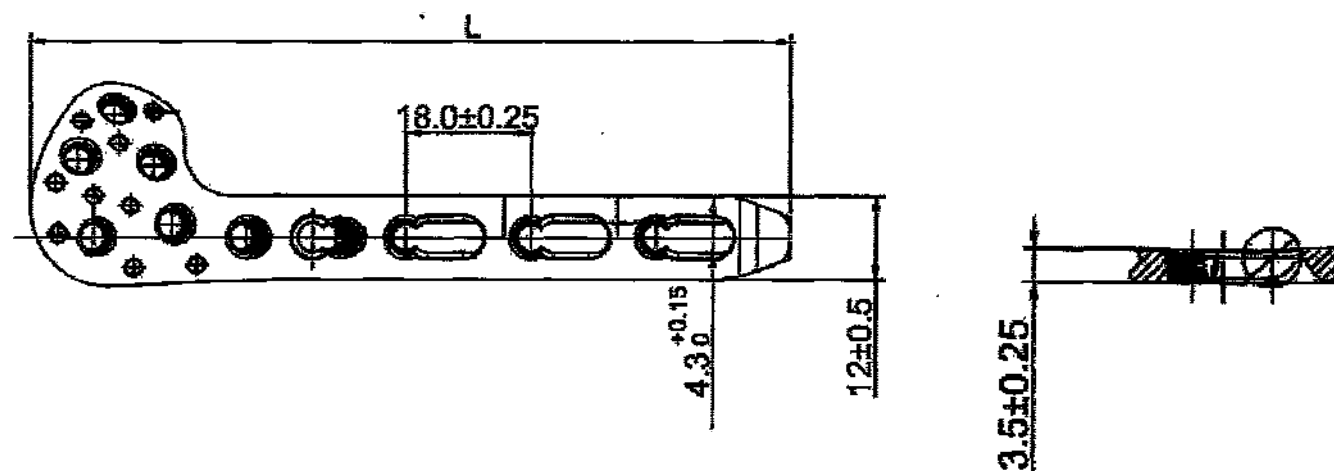

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	12 ± 0,5	18 ± 0,25	4,3 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2	91	2	T: 16,48 ±20% S: 28,75 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 3	109	3	T: 19,74 ±20% S: 34,44 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	127	4	T: 23 ±20% S: 40,13 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 5	145	5	T: 26,26 ±20% S: 45,81 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	163	6	T: 29,52 ±20% S: 51,5 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	199	8	T: 36,04 ±20% S: 62,88 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	235	10	T: 42,56 ±20% S: 74,25 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	271	12	T: 49,08 ±20% S: 85,63 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal for Humerus YSQ 12, right/left, size 3,5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	307	14	T: 55,61 ±20% S: 97 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5, 6-22 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 5, 6-22 increments 2

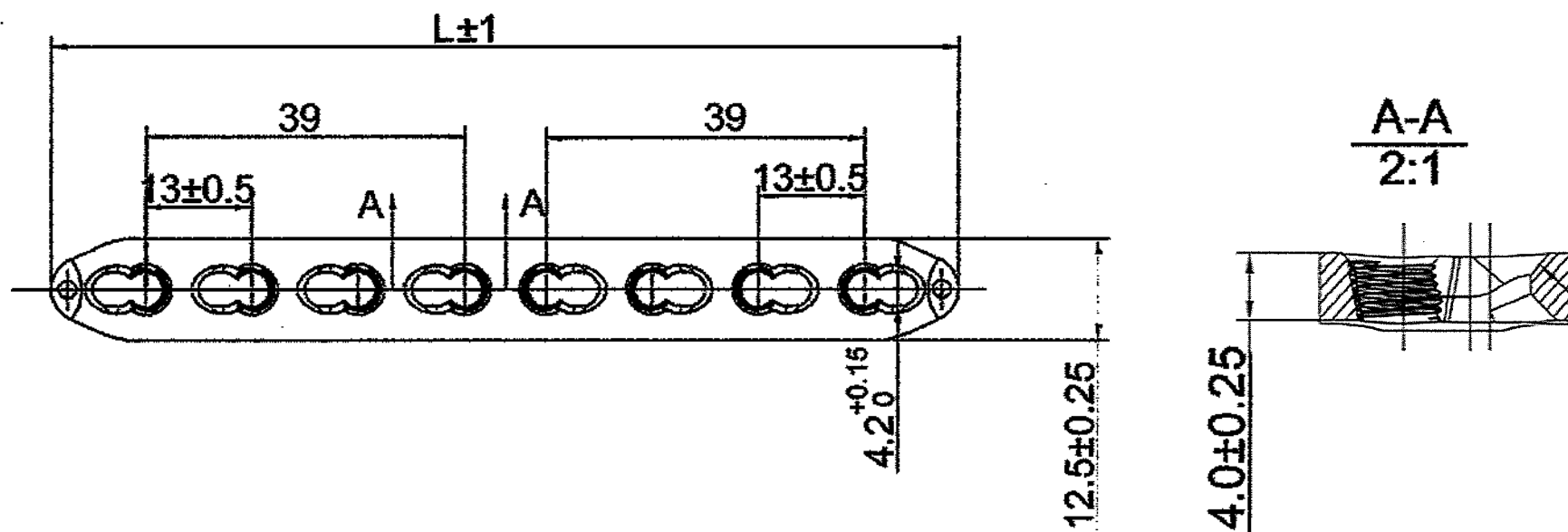

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мкм
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	12,5 ± 0,25	13 ± 0,5 39 ± 0,5	4,2 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5	72	5	T: 8,5 ±20% S: 14,82 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 6	85	6	T: 12,24 ±20% S: 27,88 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 8	111	8	T: 15,98 ±20% S: 27,88 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 10	137	10	T: 19,73 ±20% S: 34,41 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 12	163	12	T: 23,47 ±20% S: 40,95 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 14	189	14	T: 27,22 ±20% S: 47,48 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 16	215	16	T: 30,96 ±20% S: 54,01 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 18	241	18	T: 34,7 ±20% S: 60,54 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 20	267	20	T: 38,45 ±20% S: 67,07 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 22	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 22	293	22	T: 42,19 ±20% S: 73,6 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5-11 с шагом 1, 12-18 с шагом 2. / Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 5-11 increments 1, 12-18 increments 2

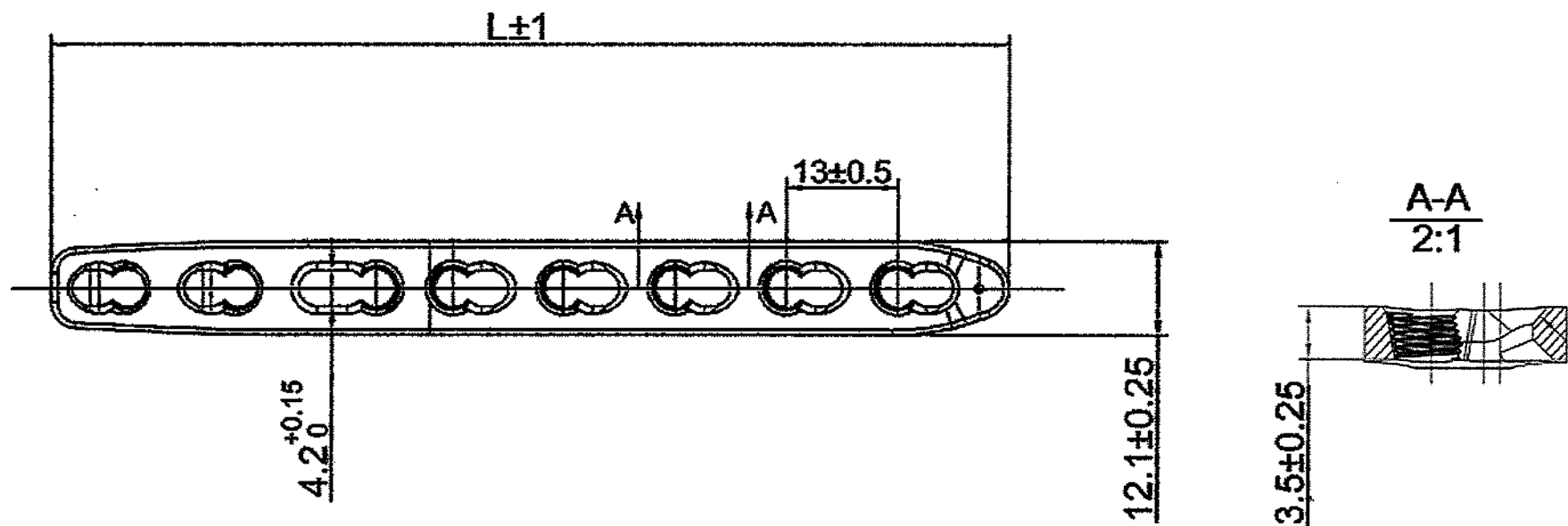

Толщина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм $\pm$ мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate width with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole width with tolerance, mm $\pm$ mm	Distance between holes with tolerance, mm $\pm$ mm	Roughness, μ m; outside/inner/others
$3,5 \pm 0,25$	$12,1 \pm 0,25$	$4,2^{+0,15}_0$	$13 \pm 0,5$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5	73	5	T: 18,63 ±20% S: 32,49 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 6	86	6	T: 21,94 ±20% S: 38,28 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 7	99	7	T: 25,26 ±20% S: 44,06 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 8	112	8	T: 28,58 ±20% S: 49,85 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 9	125	9	T: 31,89 ±20% S: 55,64 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 10	138	10	T: 35,21 ±20% S: 61,42 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 11	151	11	T: 38,53 ±20% S: 67,21 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 12	164	12	T: 41,84 ±20% S: 73 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 14	190	14	T: 48,48 ±20% S: 84,57 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 16	216	16	T: 55,11 ±20% S: 96,14 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal, ZSQ 03, size 3,5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 18	242	18	T: 61,75 ±20% S: 107,71 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия: 6-30 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes: 6-30 increments 2

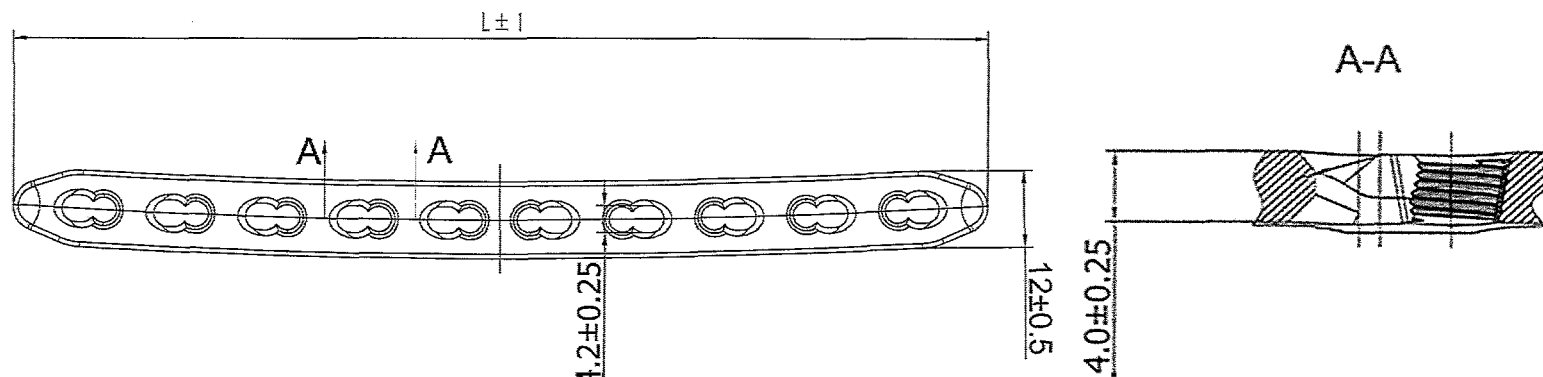


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	12 ± 0,5	4,2 ± 0,25	$3_0^{+0,15}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 6	96	6	T: 20,74 ± 20% S: 36,17 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 8	124	8	T: 26,78 ± 20% S: 46,72 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 10	152	10	T: 32,83 ± 20% S: 57,27 ± 20%

Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 12	180	12	T: 38,88 ±20% S: 67,82 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 14	208	14	T: 44,93 ±20% S: 78,37 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 16	236	16	T: 50,98 ±20% S: 88,92 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 18	264	18	T: 57,02 ±20% S: 99,48 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 20	292	20	T: 63,07 ±20% S: 110,03 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 22	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 22	320	22	T: 69,12 ±20% S: 120,58 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 24	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 24	348	24	T: 75,17 ±20% S: 131,13 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 26	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 26	376	26	T: 81,22 ±20% S: 141,68 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 28	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 28	404	28	T: 87,26 ±20% S: 152,23 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad Plate, ZSQ 05, size 3.5 mm, staggered Holes, holes 30	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия 30	432	30	T: 93,31 ±20% S: 162,78 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14 / Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 3, 5, 7, 9, 14

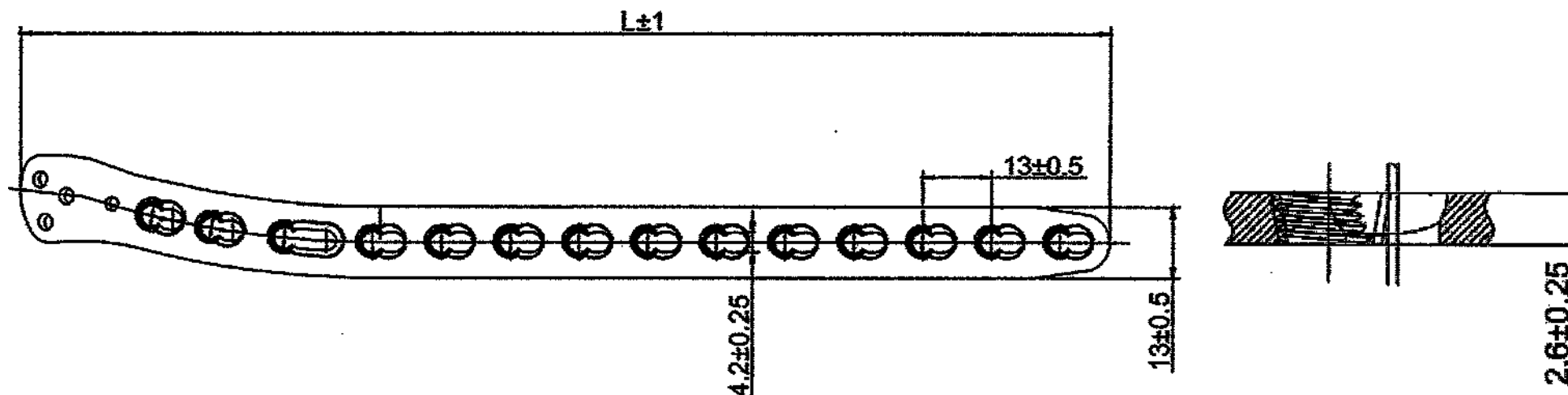


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	13 ± 0,5	4,2 ± 0,25	13 ± 0,5	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3	65	3	T: 10,27 ±20% S: 17,91 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 5	91	5	T: 14,37 ±20% S: 25,07 ±20%

Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 7	117	7	T: 18,48 ±20% S: 32,24 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 9	143	9	T: 22,59 ±20% S: 39,4 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 11	208	14	T: 32,85 ±20% S: 57,31 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14 / Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 3, 5, 7, 9, 14

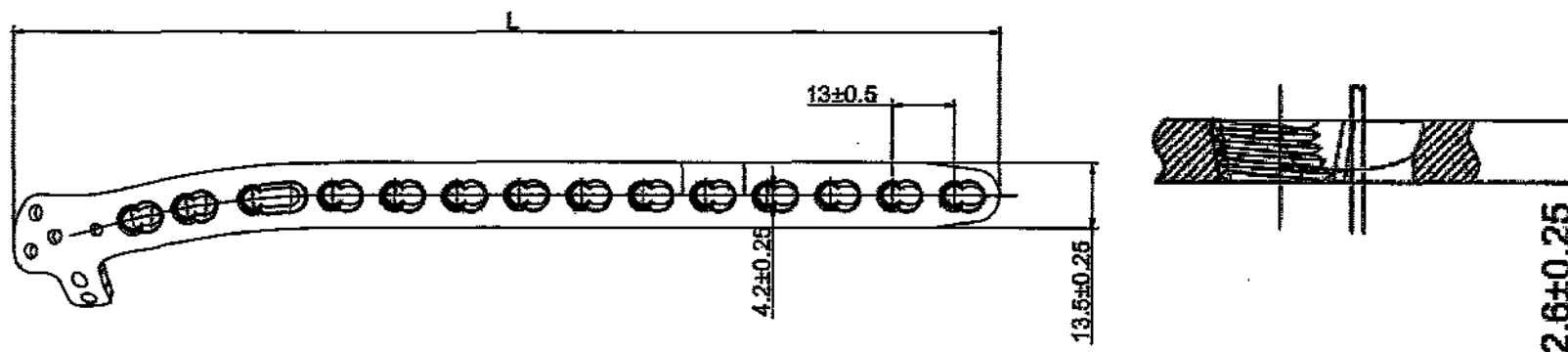

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	13,5 ± 0,25	4,2 ± 0,25	13 ± 0,5	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3	65	3	T: 10,27 ±20% S: 17,91 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 5	91	5	T: 14,37 ±20% S: 25,07 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 7	117	7	T: 18,48 ±20% S: 32,24 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 9	143	9	T: 22,59 ±20% S: 39,4 ±20%
Plate Locking compression (LCP) dorsolateral, Distal Humerus, with support, YSQ 12, right/left, size, 2.7/3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 14	208	14	T: 32,85 ±20% S: 57,31 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4,6,8,10,12,14
/ Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 4,6,8,10,12,14

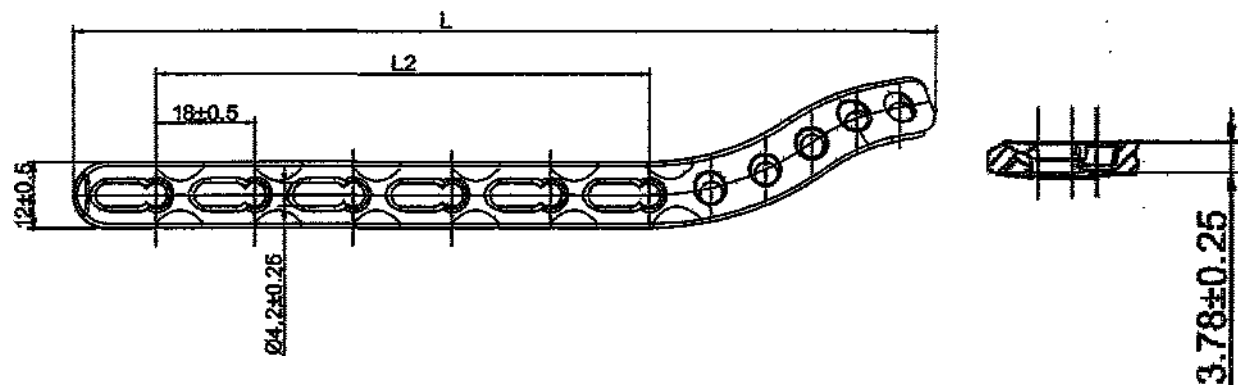

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мкм
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,78 ± 0,25	12 ± 0,5	18 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±1, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	Масса погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	122	54	4	T: 27,67 ±20% S: 48,27 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	158	90	6	T: 35,83 ±20% S: 62,51 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	194	126	8	T: 44 ±20% S: 76,75 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	230	162	10	T: 52,16 ±20% S: 91 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	266	198	12	T: 60,33 ±20% S: 105,24 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Distal Humerus YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	302	234	14	T: 68,49 ±20% S: 119,48 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14 / Plate Locking compression (LCP) Distal Humerus Plate, medial YSQ 12, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes: 3, 5, 7, 9, 14

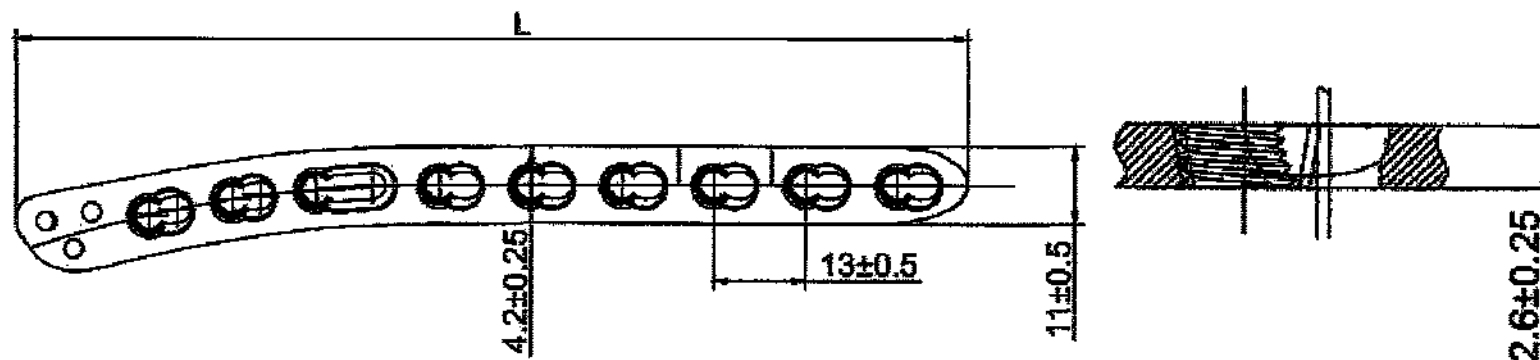


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	11 ± 0,5	13 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Distal Humerus Plate, medial YSQ 12, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3	59	3	T: 7,3 ± 20% S: 12,74 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Distal Humerus Plate, medial YSQ 12, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 5	84	5	T: 10,4 ± 20% S: 18,13 ± 20%

Plate Locking compression (LCP) Distal Humerus Plate, medial YSQ 12, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 7	110	7	T: 13,61 $\pm$ 20% S: 23,75 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Distal Humerus Plate, medial YSQ 12, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 9	136	9	T: 16,83 $\pm$ 20% S: 29,36 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Distal Humerus Plate, medial YSQ 12, right/left, size 2.7 / 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 14	201	14	T: 24,87 $\pm$ 20% S: 43,39 $\pm$ 20%


Пластина фиксирующая компрессионная проксимальная (LCP) периферийная для лучевой кости, JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2, 3, 4 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Rim JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 2, 3, 4

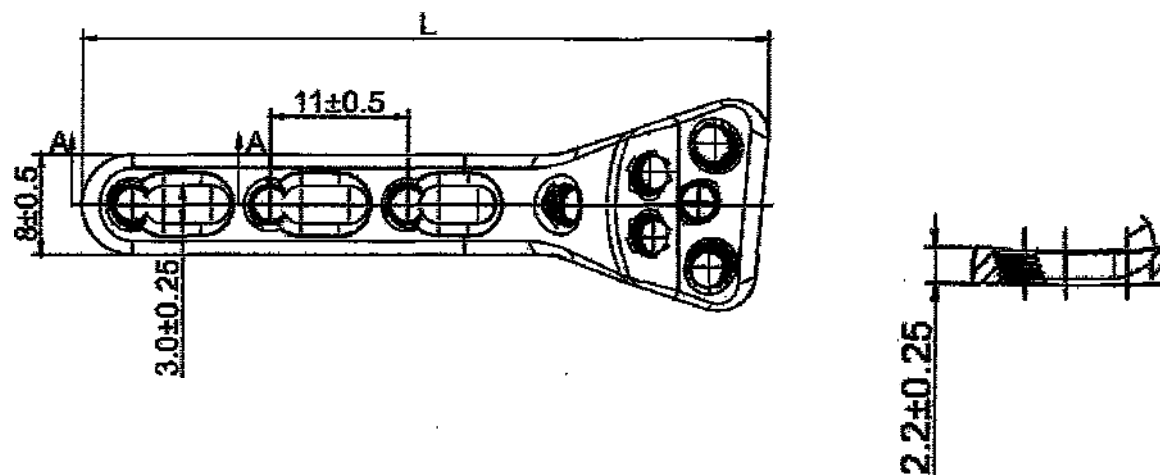

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,2 ± 0,25	8 ± 0,5	11 ± 0,5	3 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Rim JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная периферийная для лучевой кости, JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2	34	2	T: 2,69 ±20% S: 4,7 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Rim JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная периферийная для лучевой кости, JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3	46	3	T: 3,64 ±20% S: 6,36 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Rim JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная периферийная для лучевой кости, JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 4	56	4	T: 4,44 ±20% S: 7,74 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для шейки лучевой кости JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2, 3, 4 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Neck JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 2, 3, 4

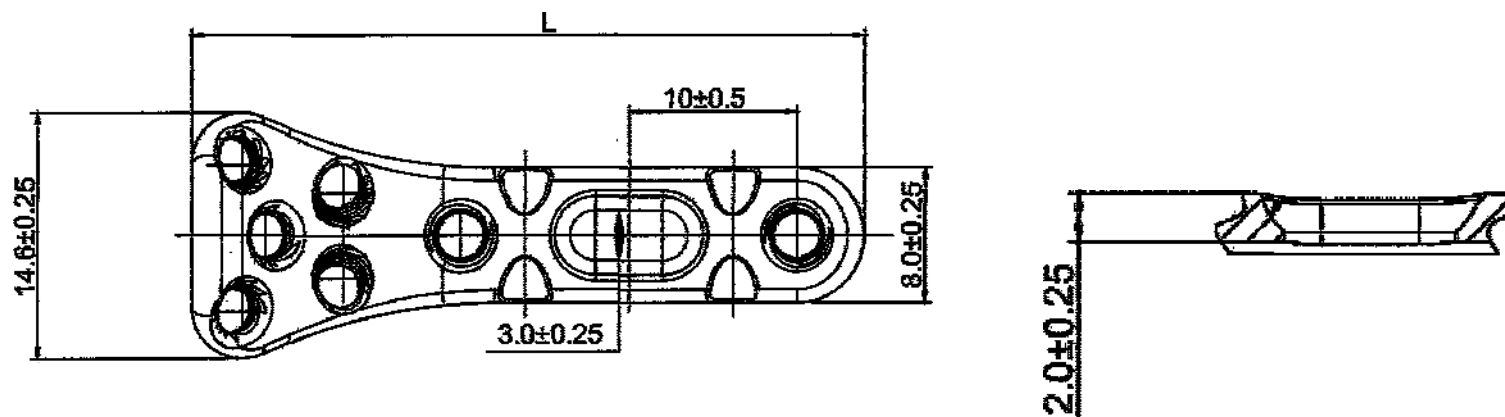

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,25 14,6 ± 0,25	10 ± 0,5	3 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Neck JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для шейки лучевой кости JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2	28	2	T: 2,02 ±20% S: 3,52 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Neck JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для шейки лучевой кости JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3	40	3	T: 2,88 ±20% S: 5,02 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Radius Neck JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для шейки лучевой кости JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 4	50	4	T: 3,6 ±20% S: 6,28 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2, 4, 6, 8, 10, 12 / Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 2, 4, 6, 8, 10, 12

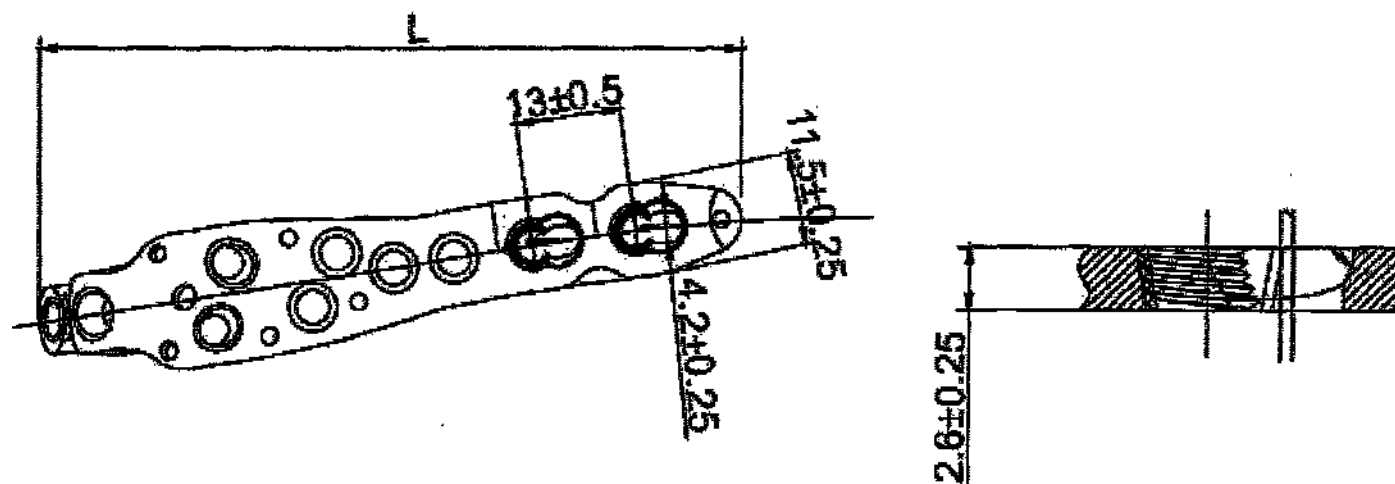

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	11,5 ± 0,25	13 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2	86	2	T: 6,8 ±20% S: 11,87 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	112	4	T: 8,86 ±20% S: 15,45 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	138	6	T: 10,91 ±20% S: 19,04 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	164	8	T: 12,97 ±20% S: 22,63 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	190	10	T: 15,03 ±20% S: 26,21 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Olecranon JSQ 01, right/left, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	216	12	T: 17,08 ±20% S: 29,8 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4-13 с шагом 1 / Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 4-13 increments 1

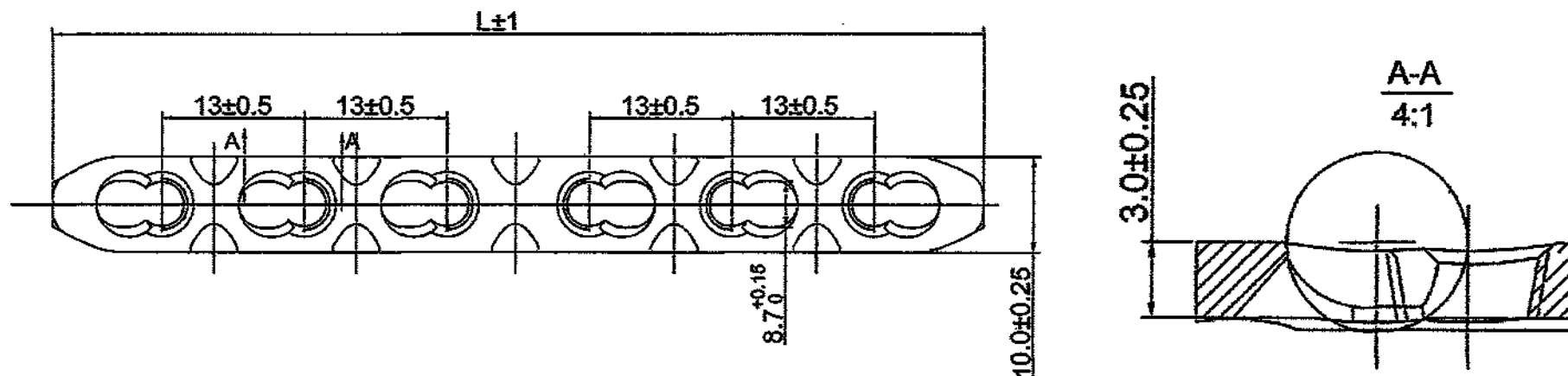

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3 ± 0,25	10 ± 0,25	13 ± 0,5	8,7 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L $\pm$ l, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г $\pm$ g / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4	59	4	T: 5,84 $\pm$ 20% S:10,19 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5	72	5	T: 7,13 $\pm$ 20% S:12,43 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 6	85	6	T: 8,42 $\pm$ 20% S:14,68 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 7	98	7	T: 9,7 $\pm$ 20% S:16,92 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 8	111	8	T: 10,99 $\pm$ 20% S:19,17 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 9	124	9	T: 12,28 $\pm$ 20% S:21,41 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 10	137	10	T: 13,56 $\pm$ 20% S:23,66 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 11	150	11	T: 14,85 $\pm$ 20% S:25,91 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 12	163	12	T: 16,14 $\pm$ 20% S:28,15 $\pm$ 20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 3.5 mm, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 13	176	13	T: 17,42 $\pm$ 20% S:30,4 $\pm$ 20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 8-22 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 8-22 increments 2

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,4 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 8	124	8	T: 20,83 ±20% S:37,2 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 10	152	10	T: 25,53 ±20% S:45,2 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 12	180	12	T: 30,24 ±20% S:54 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 14	208	14	T: 34,94 ±20% S:62,4 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 16	236	16	T: 39,65 ±20% S:70,8 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 18	264	18	T: 44,35 ±20% S:79,2 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 20	292	20	T: 49 ±20% S:87,6 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 3.5 mm, holes: 22	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 22	320	22	T: 53,76 ±20% S:96 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии локтевой кости, ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия: 6, 8 / Plate Locking compression (LCP) Ulna Osteotomy ZSQ 03, size 2.7 mm, holes: 6, 8

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	9 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Ulna Osteotomy ZSQ 03, size 2.7 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии локтевой кости, ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия: 6	62	6	T: 20,83 ± 20% S: 15,2 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Ulna Osteotomy ZSQ 03, size 2.7 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии локтевой кости, ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия: 8	76	8	T: 20,83 ± 20% S: 15,2 ± 20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) ладонная лучевой кости, YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3, 5, 7 / Plate Locking compression (LCP) Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 3, 5, 7

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8,3 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) ладонная лучевой кости, YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3	43	3	T: 20,83 ±20% S:15,2 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) ладонная лучевой кости, YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 5	61	5	T: 20,83 ±20% S:15,2 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) ладонная лучевой кости, YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 7	79	7	T: 20,83 ±20% S:15,2 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 3, 5 / Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 4 Holes, holes: 3, 5

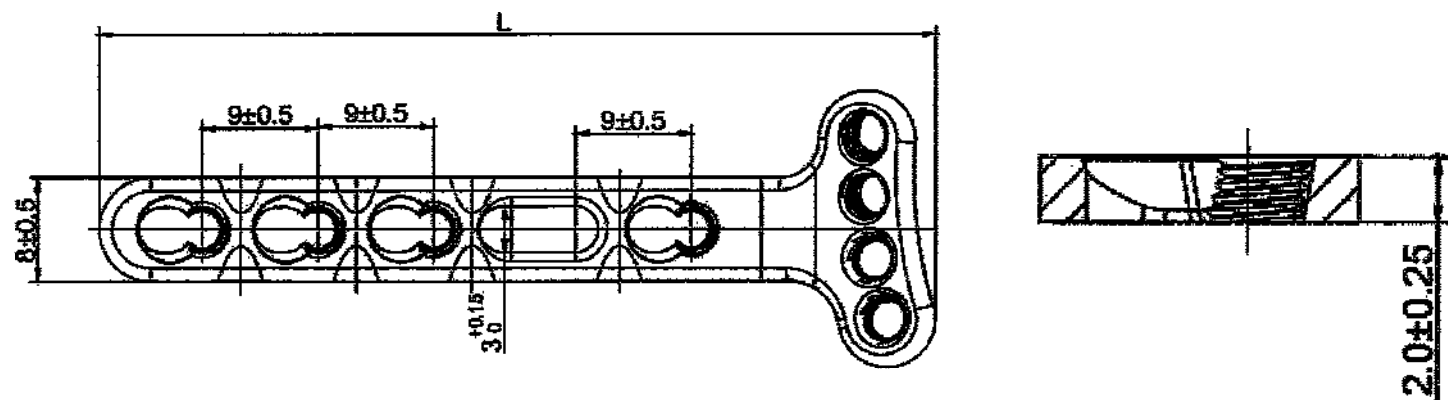

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояния между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,5	9 ± 0,5	3 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 4 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 3	47	3	T: 3,38 ±20% S: 5,9 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 4 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 5	65	5	T: 4,68 ±20% S: 8,16 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3, 5 / Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 3, 5

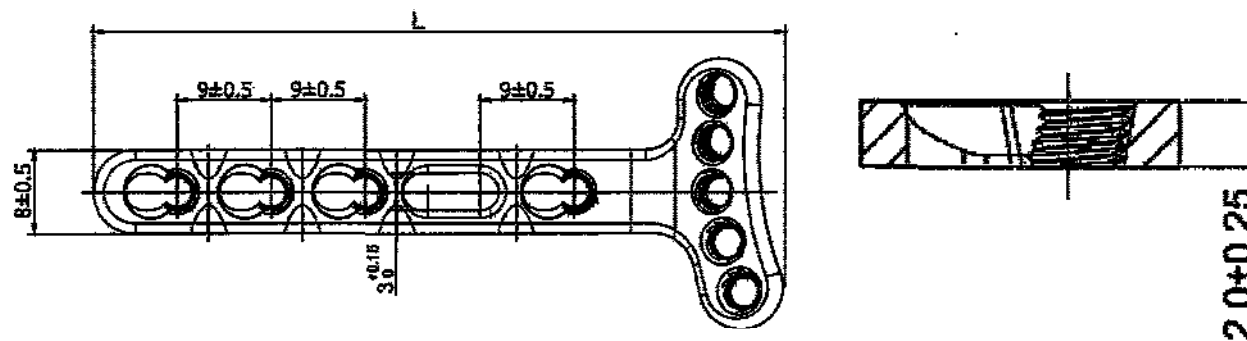

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,5	9 ± 0,5	3 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3	48	3	T: 3,46 ±20% S: 6,03 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius YSQ 09, right/left, size 2.4 mm, head with 5 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 5	66	5	T: 4,75 ±20% S: 8,29 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная локтевой кости JSQ 01, правая/ левая, размер 2,0 мм, отверстий 7 / Plate Locking compression (LCP) Distal Ulna JSQ 01, right/left, size 2.0 mm, holes: 7

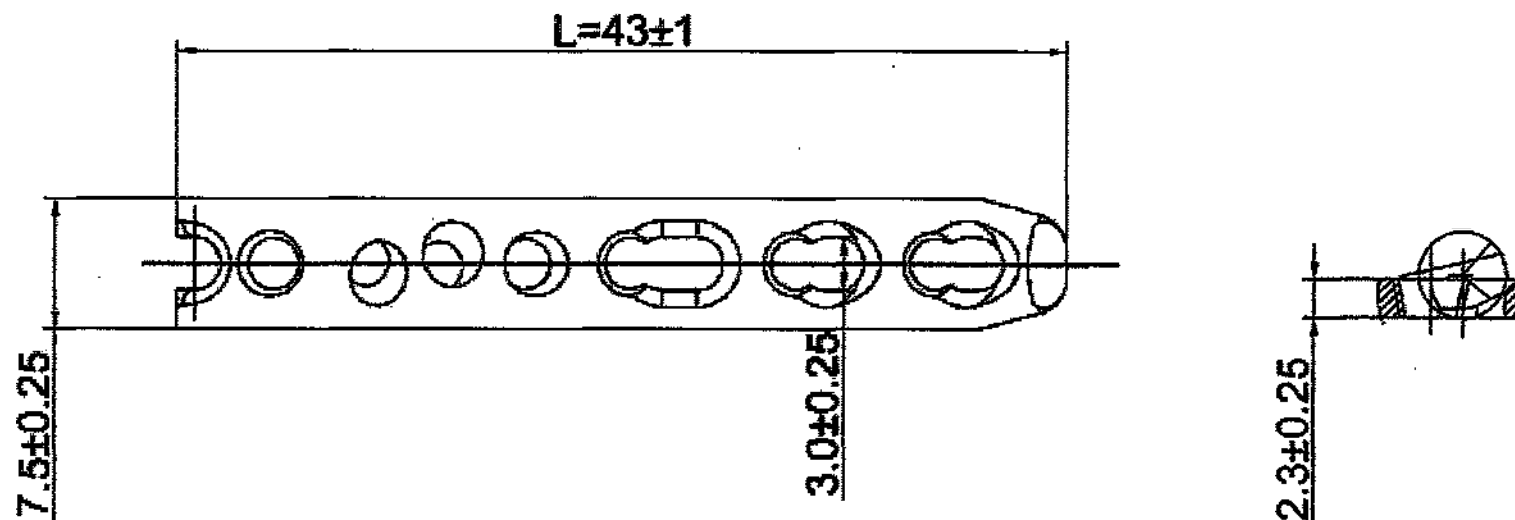

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	L ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Отверстий, шт	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мкм,
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	L ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Holes, pcs	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
2,3 ± 0,25	43±1	7,5 ± 0,5	3 ± 0,25	7	T: 3,57 ±20% S: 6,23 ±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) задняя дистальная для лучевой кости JSQ 01, прямая, размер 2,4 мм, отверстия: 5, 6 / Plate Locking compression (LCP) Dorsal Distal Radius JSQ 01, straight, size 2.4 mm, holes: 5, 6

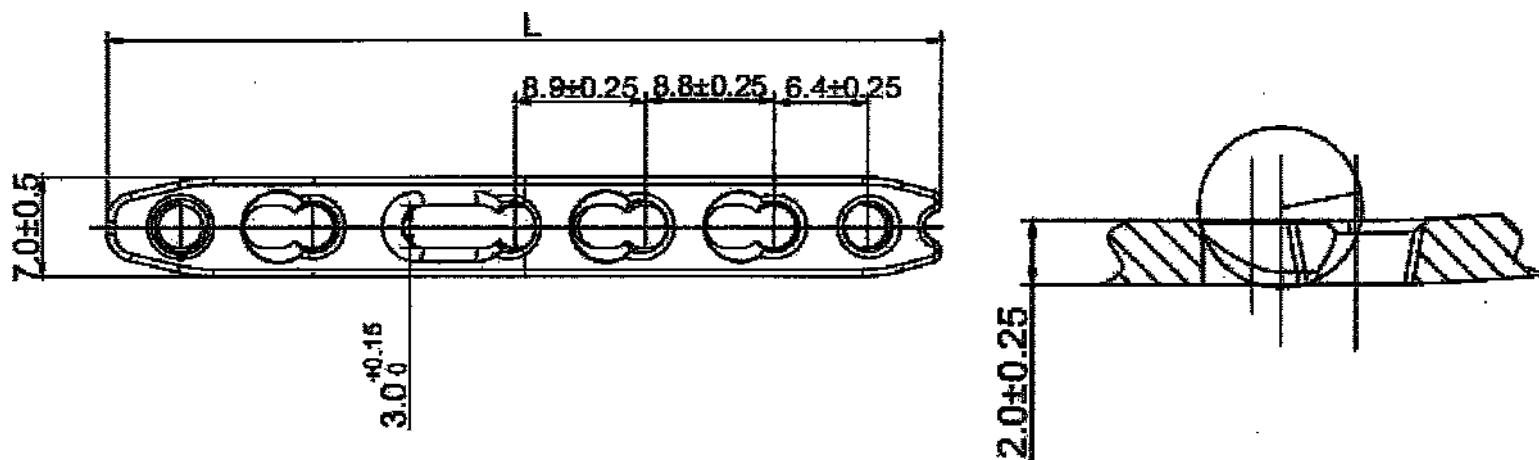

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	7 ± 0,5	6,4 ± 0,25 8,8 ± 0,25 8,9 ± 0,25	3 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	Л ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Dorsal Distal Radius JSQ 01, straight, size 2.4 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) задняя дистальная для лучевой кости JSQ 01, прямая, размер 2,4 мм, отверстия: 5	48	5	T: 3,02 ± 20% S: 5,28 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Dorsal Distal Radius JSQ 01, straight, size 2.4 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) задняя дистальная для лучевой кости JSQ 01, прямая, размер 2,4 мм, отверстия: 6	57	6	T: 3,59 ± 20% S: 6,26 ± 20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4, 5, 7, 9, 11 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4, 5, 7, 9, 11

Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm; outside/inner/others
5 ± 0,25	17,5 ± 0,5	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	105,5	4	T: 41 ± 20% S: 72 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 5	123	5	T: 48 ± 20% S: 84 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 7	158	7	T: 61 ± 20% S: 107 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 9	193	9	T: 75 ± 20% S: 132 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Femur, JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 11	228	11	T: 88 ± 20% S: 155 ± 20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периапартулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 2-16 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 2-16 increments 2

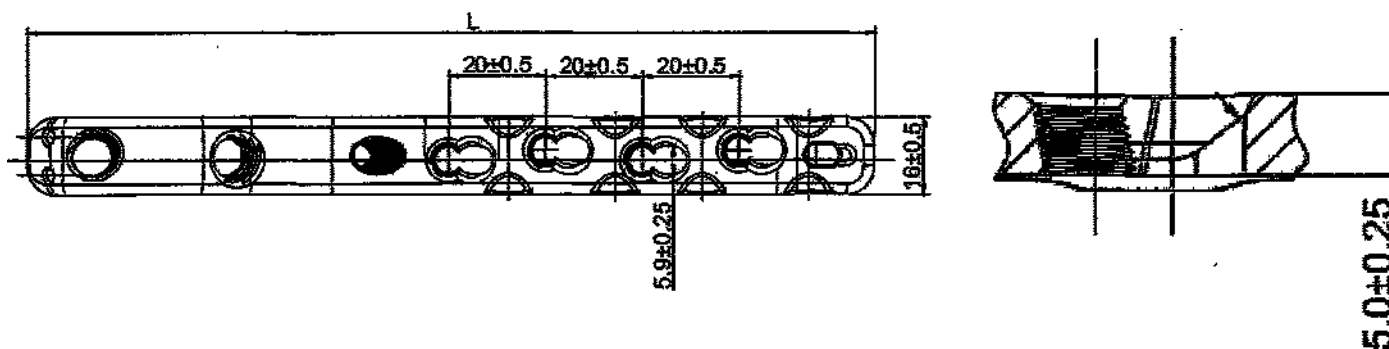


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
5 ± 0,25	16 ± 0,5	20 ± 0,5	5,9 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периапартулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 2	139	2	T: 50,04 ± 20% S: 87,29 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периапартулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	175	4	T: 63 ± 20% S: 109,9 ± 20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периапартулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6	211	6	T: 75,96 ± 20% S: 132,51 ± 20%

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 8	247	8	T: 88,92 ±20% S:155,12 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 10	283	10	T: 101,88 ±20% S:177,72 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 12	319	12	T: 114,84 ±20% S:200,33 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 14	355	14	T: 127,8 ±20% S: 222,94 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Proximal Femur JZQ 08, right/left, size 4.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 16	391	16	T: 140,76 ±20% S:245,55 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 5, 7, 9, 11, 13 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 5, 7, 9, 11, 13

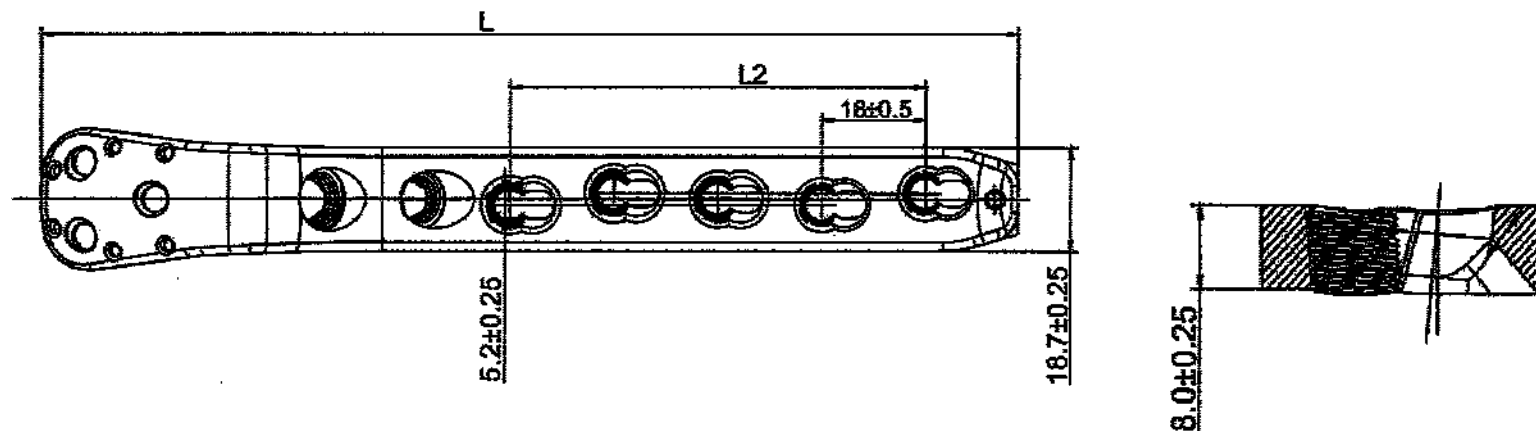

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
8 ± 0,25	18,7 ± 0,25	18 ± 0,5	5,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	12 ±0,5, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 5	168	72	5	T: 73,48 ±20% S:128,19 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 7	204	108	7	T: 89,23 ±20% S:155,66 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 9	240	144	9	T: 104,98 ±20% S:183,12 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 11	276	180	11	T: 120,59 ±20% S:210,59 ±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 08, size 4.5 mm, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 13	312	216	13	T: 136,47 ±20% S:238,06 ±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes: 4-12 increments 2

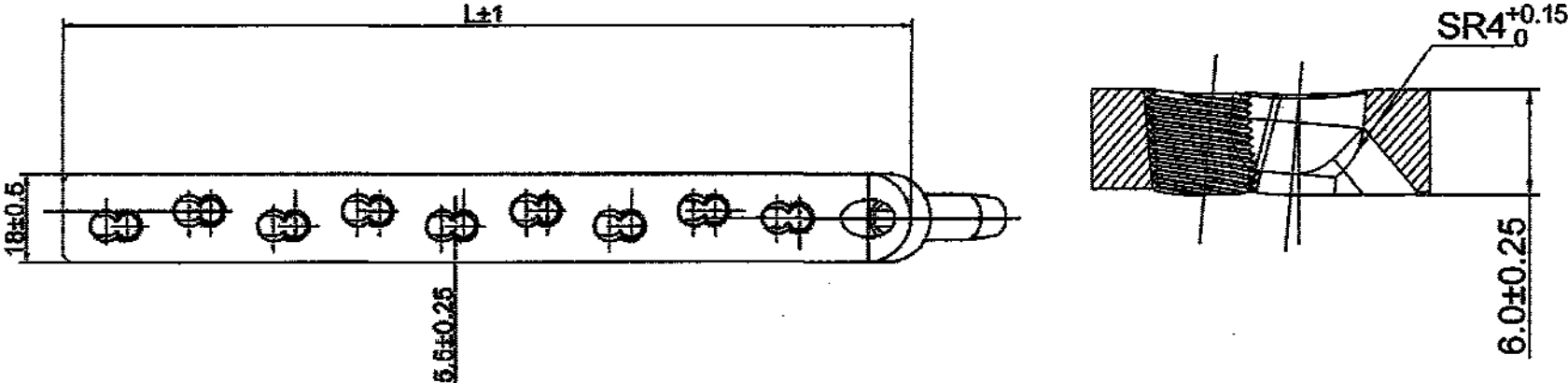

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,5	5.5 ± 0,25	4 ₀ ^{+0.15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия 4	136	4	T: 73,44 ±20% S:128,11 ±20%
Plate Locking compression (LCP) for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия 6	176	6	T: 95,04 ±20% S:165,79 ±20%
Plate Locking compression (LCP) for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия 8	216	8	T: 116,64 ±20% S:203,47 ±20%
Plate Locking compression (LCP) for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия 10	256	10	T: 138,24 ±20% S:241,15 ±20%
Plate Locking compression (LCP) for DHS YSQ 36, size 4.5 mm, holes 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия 12	296	12	T: 159,84 ±20% S: 278,83 ±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 2, 4, 6-18 с шагом 1, 20 / Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 2, 4, 6-18 increments 1, 20

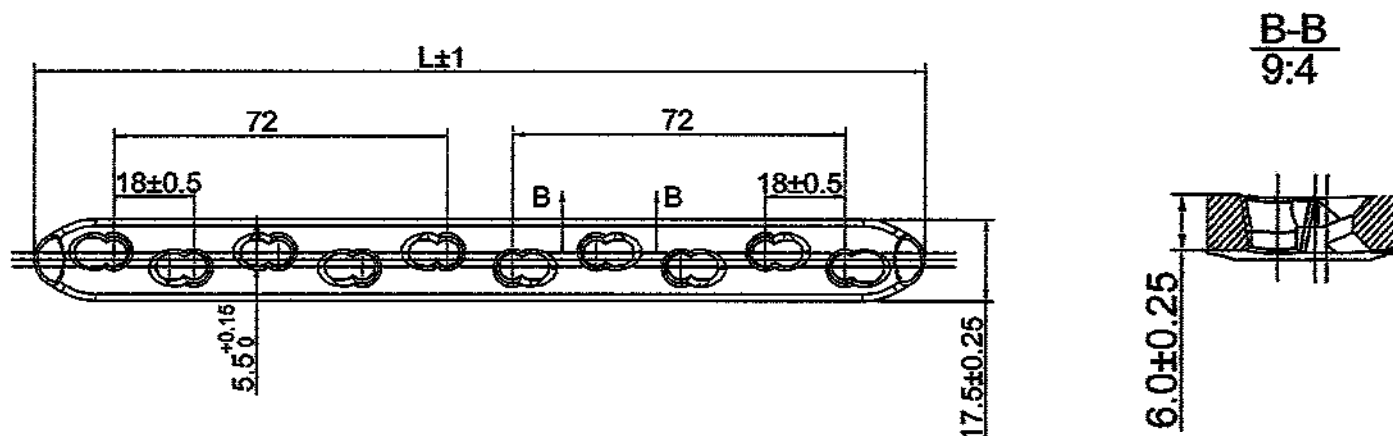


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мм.
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	17,5 ± 0,25	18 ± 0,5 72 ± 0,5	5,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 2	44	2	T=38.75±20% S=67.59±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 4	80	4	T=47.25±20% S=82.43±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 6	116	6	T=55.76±20% S=97.26±20%

Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 7	134	7	T=64.26±20% S=112.10±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 8	152	8	T=72.77±20% S=126.93±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 9	170	9	T=81.27±20% S=141.77±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 10	186	10	T=89.78±20% S=156.61±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 11	206	11	T=98.28±20% S=171.44±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 12	229	12	T=106.79±20% S=186.28±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 13	242	13	T=115.29±20% S=201.12±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 14	260	14	T=123.8±20% S=215.95±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 15	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 15	278	15	T=132.3±20% S=230.79±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 16	296	16	T=140.81±20% S=245.63±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 17	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 17	314	17	T=149.31±20% S=260.46±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 18	332	18	T=159.82±20% S=275.3±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight Broad ZSQ 03, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 20	368	20	T=166.32±20% S=290.14±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 12-26 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 12-26 increments 2

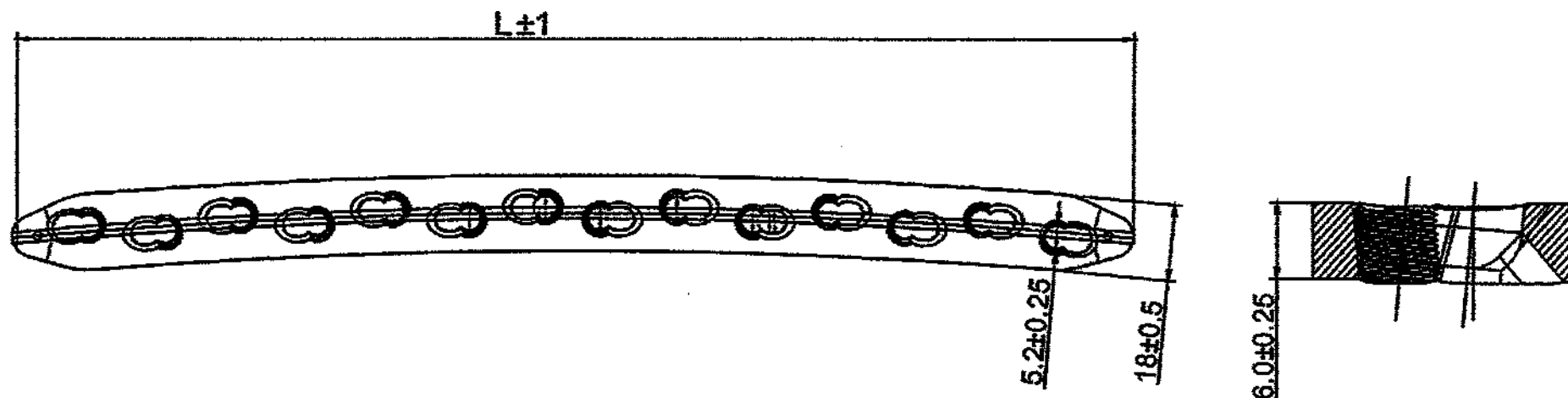


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мкм.
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,5	18 ± 0,5 72 ± 0,5	5,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 12	229	12	T=129.84±20% S=226.5±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 14	265	14	T=120.26±20% S=262.11±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 16	300	16	T=170.1±20% S=296.73±20%

Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 18	336	18	T=190.51±20% S=332.34±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 20	372	20	T=210.92±20% S=367.95±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 22	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 22	408	22	T=231.34±20% S=403.55±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 24	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 24	449	24	T=251.18±20% S=438.17±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad ZSQ 05, size 4.5 mm, staggered Holes, holes: 26	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 26	479	26	T=271.59±20% S=473.78±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мыщелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6-20 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 6-20 increments 2

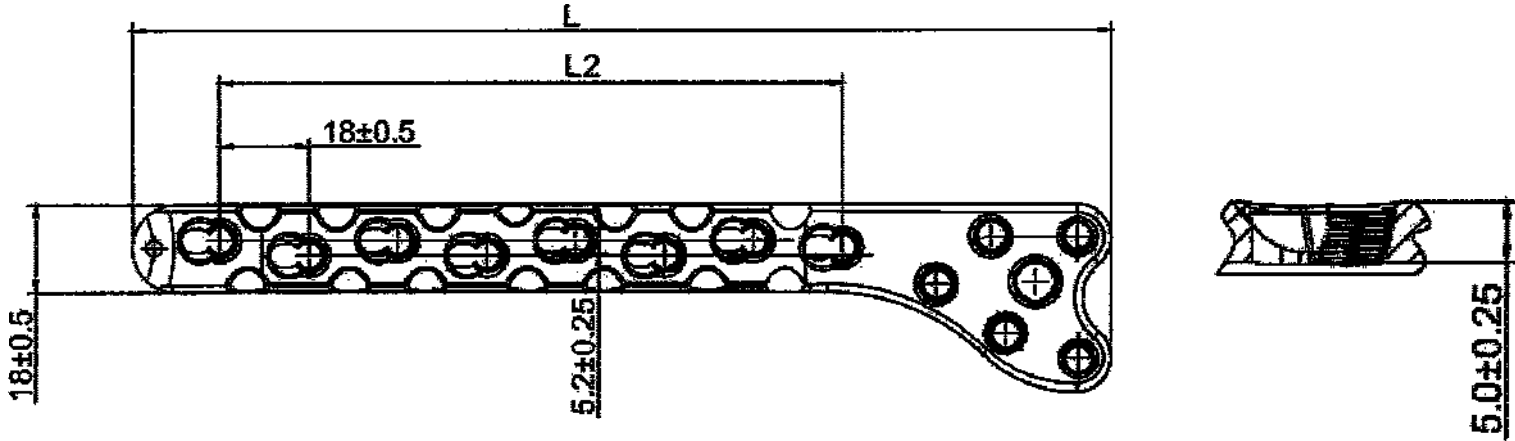

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мм.
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
5 ± 0,25	18 ± 0,5	18 ± 0,5	5,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±0,5, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	Масса погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6	170	90	6	T=68.85±20% S=120.11±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 8	206	126	8	T=83.43±20% S=145.54±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 10	242	162	10	T=98.01±20% S=170.97±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 12	278	198	12	T=112.59±20% S=196.41±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 14	314	234	14	T=127.17±20% S=221.84±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 16	350	270	16	T=141.75±20% S=247.28±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 18	386	306	18	T=156.33±20% S=272.71±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Condylar JZQ 05, right/left, size 4.5 mm, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышцелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 20	422	342	20	T=170.91±20% S=298.14±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-16 increments 2

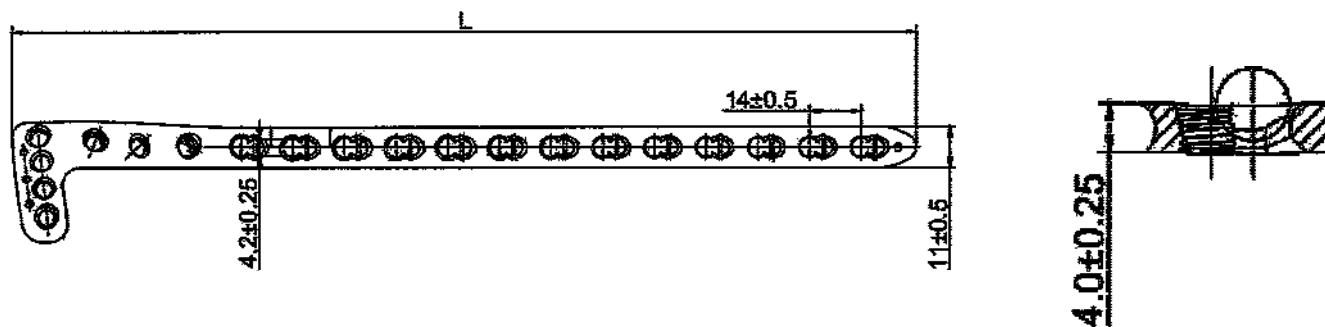


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
4 ± 0,25	11 ± 0,5	14 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	81	4	T=15.24±20% S=26.58±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	107	6	T=20.13±20% S=35.11±20%

Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	133	8	$T=25.02\pm 20\%$ $S=43.64\pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	159	10	$T=29.91\pm 20\%$ $S=52.17\pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	185	12	$T=34.8\pm 20\%$ $S=60.7\pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	211	14	$T=39.69\pm 20\%$ $S=69.245\pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 16	237	16	$T=44.58\pm 20\%$ $S=77.77\pm 20\%$

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 4-14 increments 2

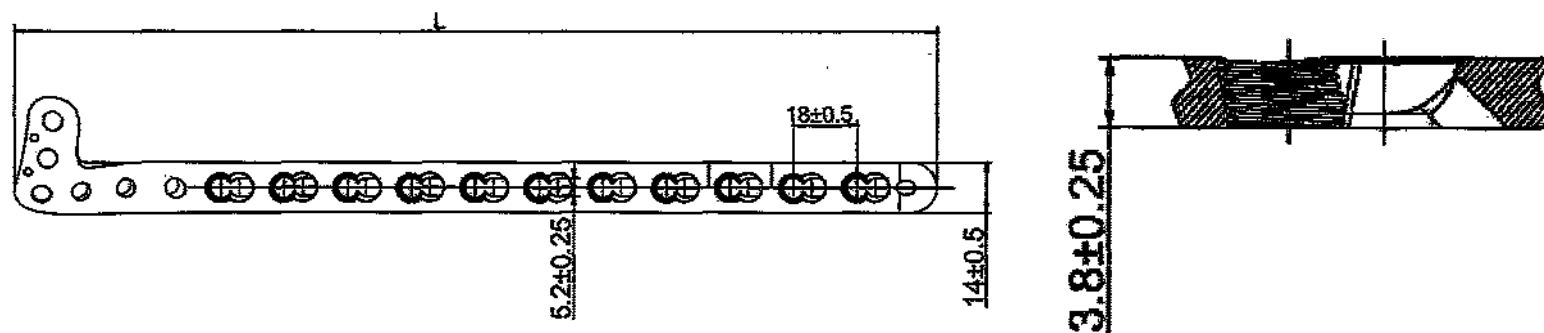

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,8 ± 0,25	14 ± 0,5	18 ± 0,5	5,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	82	4	T=19.63±20% S=34.24±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6	118	6	T=28.25±20% S=49.28±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 8	154	8	T=36.87±20% S=64.31±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 10	190	10	T=45.49±20% S=79.35±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 12	226	12	T=54.1±20% S=94.38±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Tibia YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 14	262	14	T=62.72±20% S=109.42±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
5,0 ± 0,25	16,3 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 3	100	3	T=63±20% S=111±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	120	4	T=76±20% S=135±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 5	140	5	T=89±20% S=157±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 7	180	7	T=113±20% S=199±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 9	220	9	T=138±20% S=244±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 11	260	11	T=164±20% S=290±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Lateral Tibia JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 13	300	13	T=189±20% S=334±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 4-16 increments 2

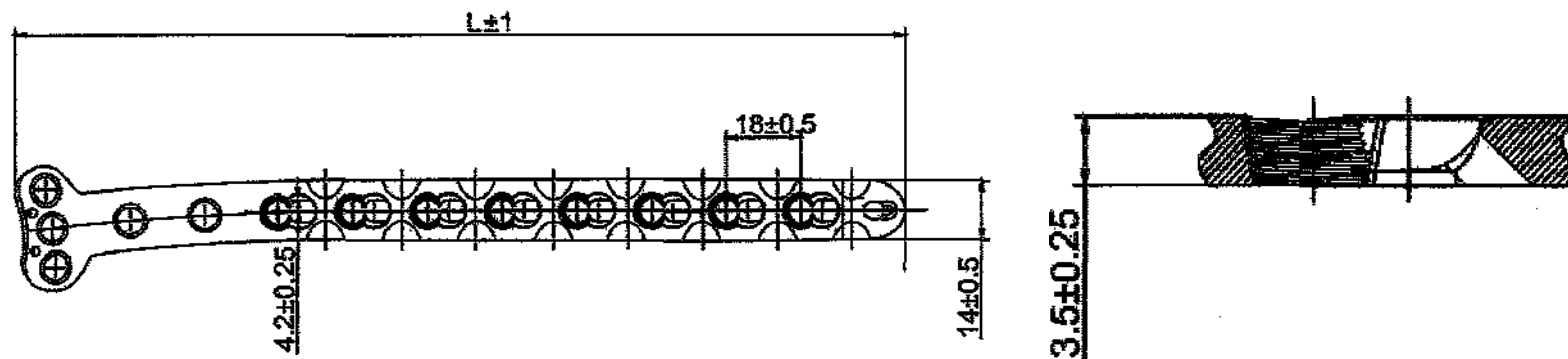


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие, мкм
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	14 ± 0,5	18 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 4	93	4	T=20.51±20% S=35.77±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 6	119	6	T=26.24±20% S=45.77±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 8	145	8	T=31.97±20% S=55.77±20%

	большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 8			
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 10	171	10	T=37.71±20% S=65.78±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 12	197	12	T=43.44±20% S=75.78±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 14	223	14	T=49.17±20% S=85.78±20%
Plate Locking compression (LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 3.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм, отверстия: 16	249	16	T=54.9±20% S=95.78±20%

Пластина фиксирующая компрессионная LCP) проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2 / Plate Locking compression LCP) Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 4-16 increments 2

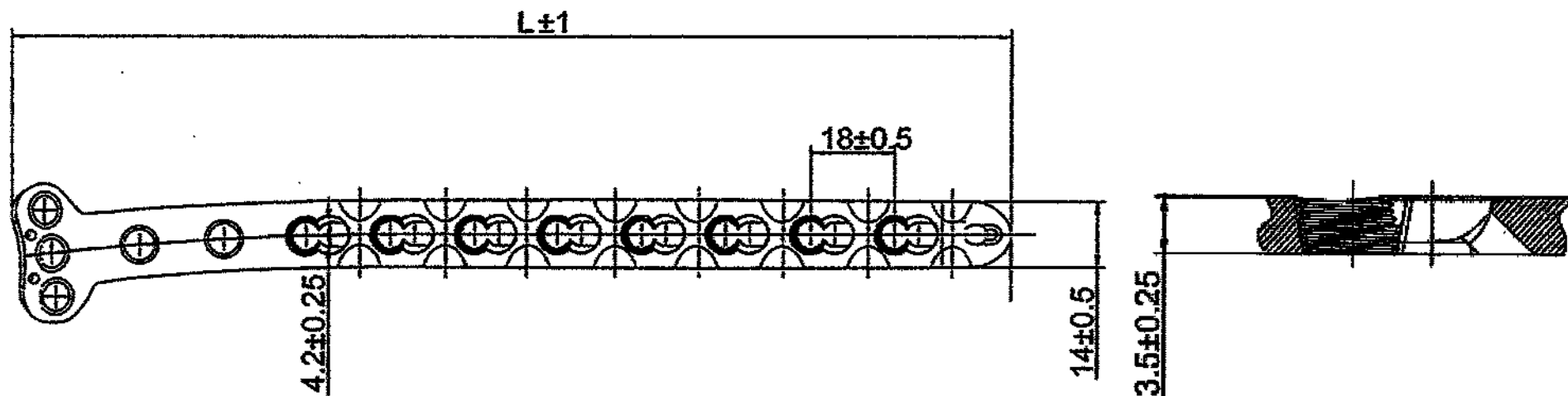


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мкм.
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	14 ± 0,5	18 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 4	93	4	T=23.37±20% S=40.77±20%
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой	119	6	T=31.31±20% S=54.62±20%

	кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 6			
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 8	145	8	T=39.25±20% S=68.47±20%
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 10	171	10	T=47.19±20% S=82.32±20%
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 12	197	12	T=55.13±20% S=96.16±20%
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 14	223	14	T=63.06±20% S=110.01±20%
Plate Locking compression (LCP)Proximal Medial Tibia YSQ 09, right/left, sizes: 4.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 4,5 мм, отверстия: 16	249	16	T=71±20% S=123.86±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 2-10 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 2-10 increments 2

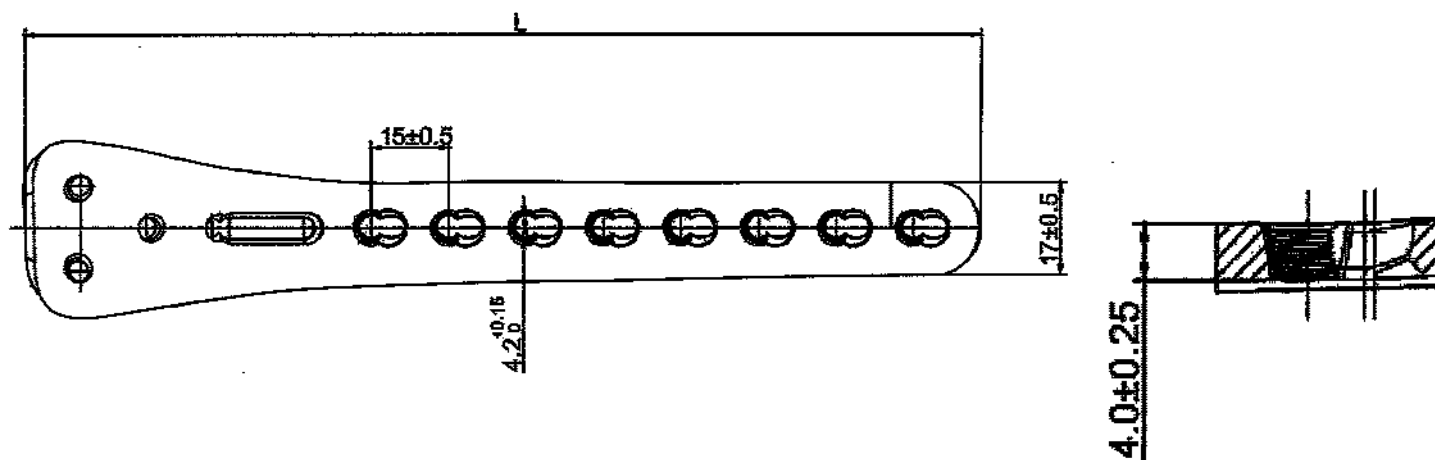

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	17 ± 0,5	15 ± 0,5	4,2 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP)Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 2	79	2	T=24.17±20% S=42.17±20%
Plate Locking compression (LCP)Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 4	106	4	T=32.44±20% S=56.58±20%
Plate Locking compression (LCP)Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 6	131	6	T=40.09±20% S=67.93±20%
Plate Locking compression (LCP)Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 8	157	8	T=48.04±20% S=83.81±20%
Plate Locking compression (LCP)Posteromedial Proximal Tibia JZQ 04, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 10	183	10	T=56±20% S=97.69±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3-11 с шагом 1, 13 / Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 3-11 increments 1, 13


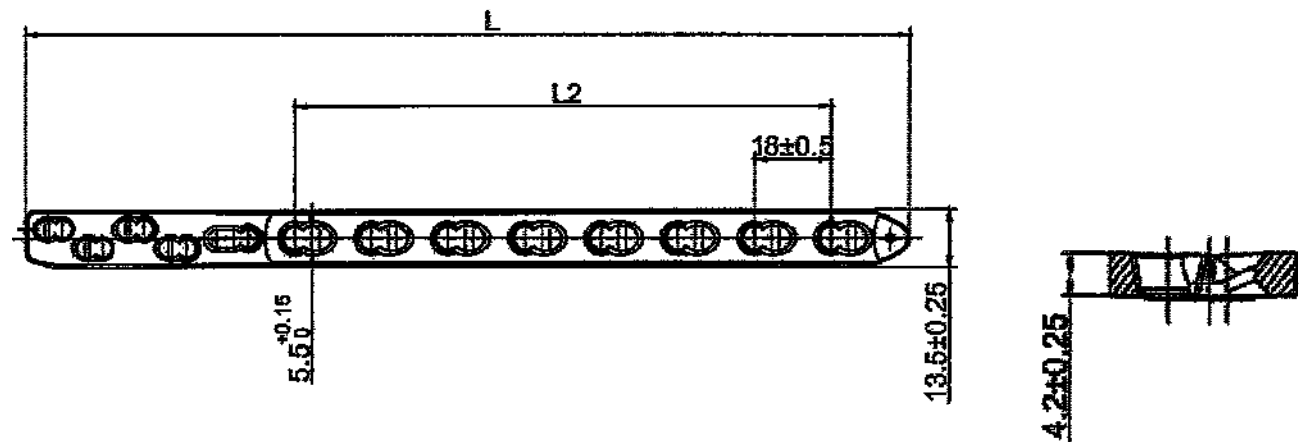


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
4,2 ± 0,25	13,5 ± 0,25	18 ± 0,5	5,5 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±0,5, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	Масса погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3	118	36	3	T=30.11±20% S=52.52±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 4	136	54	4	T=34.7±20% S=60.53±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 5	154	72	5	T=39.29±20% S=68.54±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 6	172	90	6	T=43.89±20% S=76.56±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 7	190	108	7	T=48.48±20% S=84.57±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 8	208	126	8	T=53.07±20% S=92.58±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 9	226	144	9	T=57.66±20% S=100.59±20%

Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 11	262	180	11	T=66.85±20% S=116.61±20%
Plate Locking compression (LCP) Metaphyseal ZSQ 07, right/left, size 4.5 mm /3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/ левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 13	298	216	13	T=76.03±20% S=132.64±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 2-14 с шагом 1, 16, 18 / Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 2-14 increments 1, 16, 18

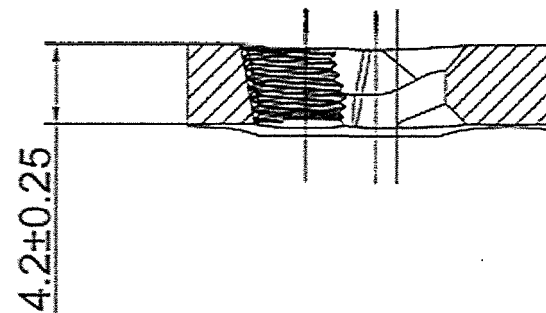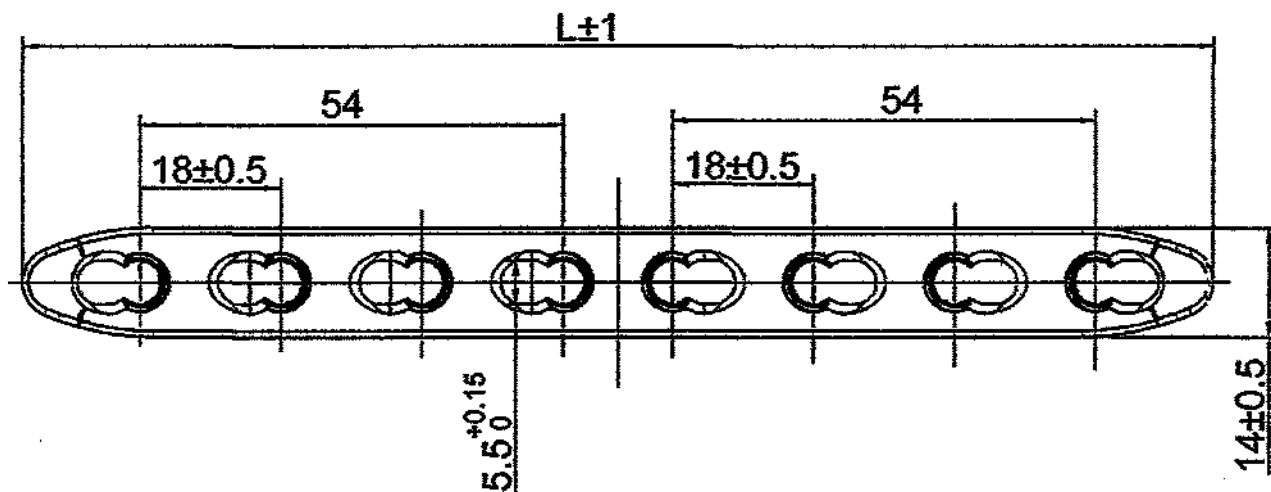


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, mm, outside/inner/others
4,2 ± 0,25	14 ± 0,25	18 ± 0,5 54±0,5	5,5 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	$L \pm 1$, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, $g \pm g$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 2	44	2	$T=11.92 \pm 20\%$ $S=20.79 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 3	62	3	$T=16.8 \pm 20\%$ $S=29.3 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 4	80	4	$T=21.67 \pm 20\%$ $S=37.81 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 5	98	5	$T=26.55 \pm 20\%$ $S=46.31 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 6	116	6	$T=31.42 \pm 20\%$ $S=54.82 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 7	134	7	$T=36.3 \pm 20\%$ $S=63.32 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 8	152	8	$T=41.18 \pm 20\%$ $S=71.83 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 9	170	9	$T=46.05 \pm 20\%$ $S=80.34 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 10	188	10	$T=50.93 \pm 20\%$ $S=88.84 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 11	206	11	$T=55.81 \pm 20\%$ $S=97.35 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 12	224	12	$T=60.68 \pm 20\%$ $S=105.86 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 13	242	13	$T=65.56 \pm 20\%$ $S=114.36 \pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 14	260	14	$T=70.43 \pm 20\%$ $S=122.87 \pm 20\%$

Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 16	296	16	$T=80.19\pm20\%$ $S=139.88\pm20\%$
Plate Locking compression (LCP) Straight Narrow ZSQ 03, size 4.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 18	332	18	$T=89.94\pm20\%$ $S=156.89\pm20\%$


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 10-22 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, , holes: 10-22 increments 2

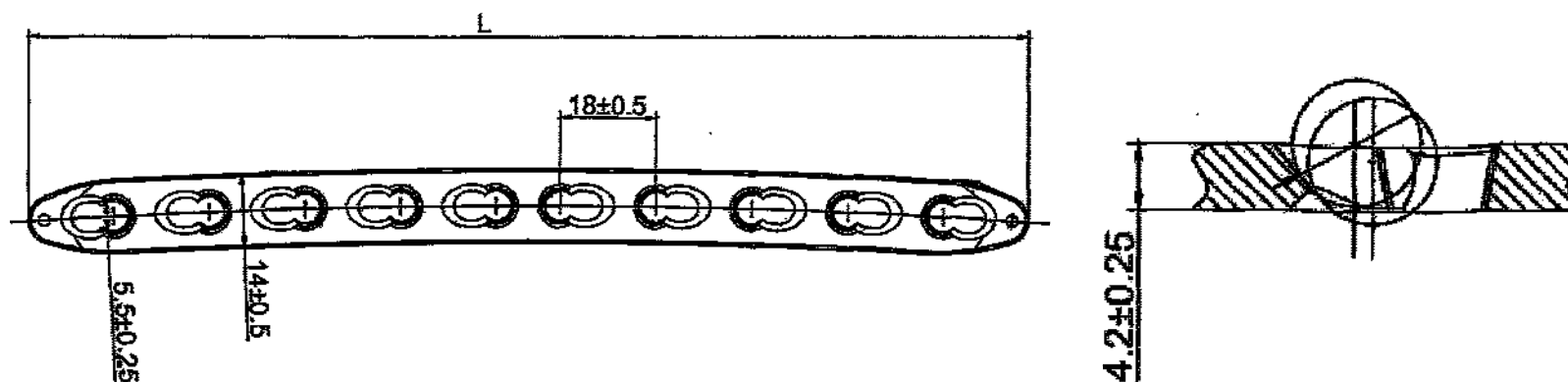

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
4,2 ± 0,25	14 ± 0,5	18 ± 0,5	5,5 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 10	156	10	T=41.27±20% S=72.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 12	188	12	T=49.75±20% S=86.77±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 14	220	14	T=58.21±20% S=101.55±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 16	252	16	T=66.68±20% S=116.32±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 18	284	18	T=75.15±20% S=131.1±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 20	315	20	T=83.61±20% S=145.8±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Narrow ZSQ 05, size 4.5 mm, holes: 22	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, , отверстия: 22	348	22	T=92.08±20% S=160.6±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-14 increments 2

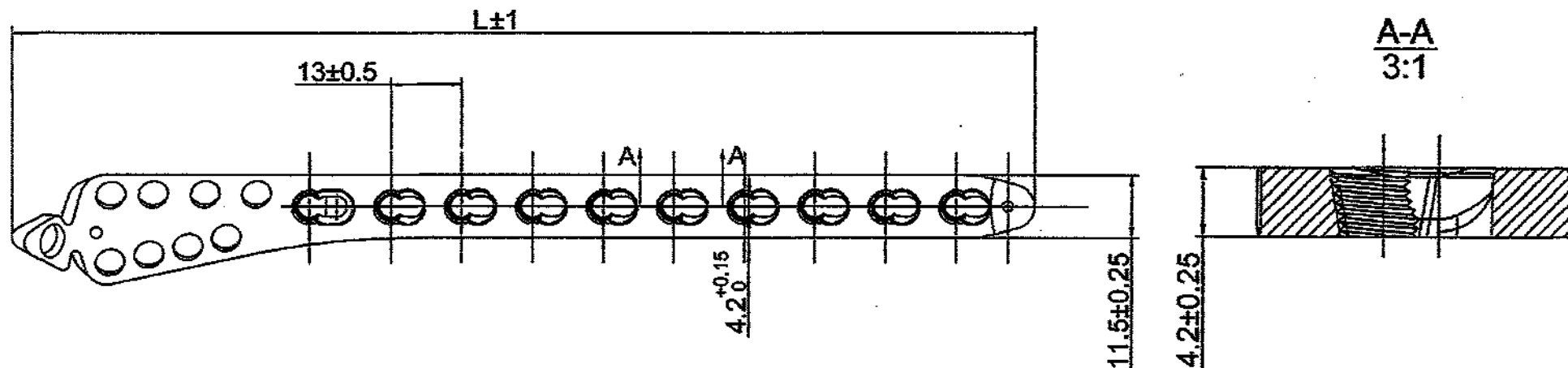

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
4,2 ± 0,25	11,5 ± 0,25	13 ± 0,5	4,2 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±1, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	116	4	T=25.21±20% S=43.98±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	142	6	T=30.86±20% S=53.84±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	168	8	T=36.51±20% S=63.7±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	194	10	T=42.17±20% S=73.56±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	220	12	T=47.82±20% S=83.41±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia JSQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	246	14	T=53.47±20% S=93.27±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 5-21 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 5-21 increments 2

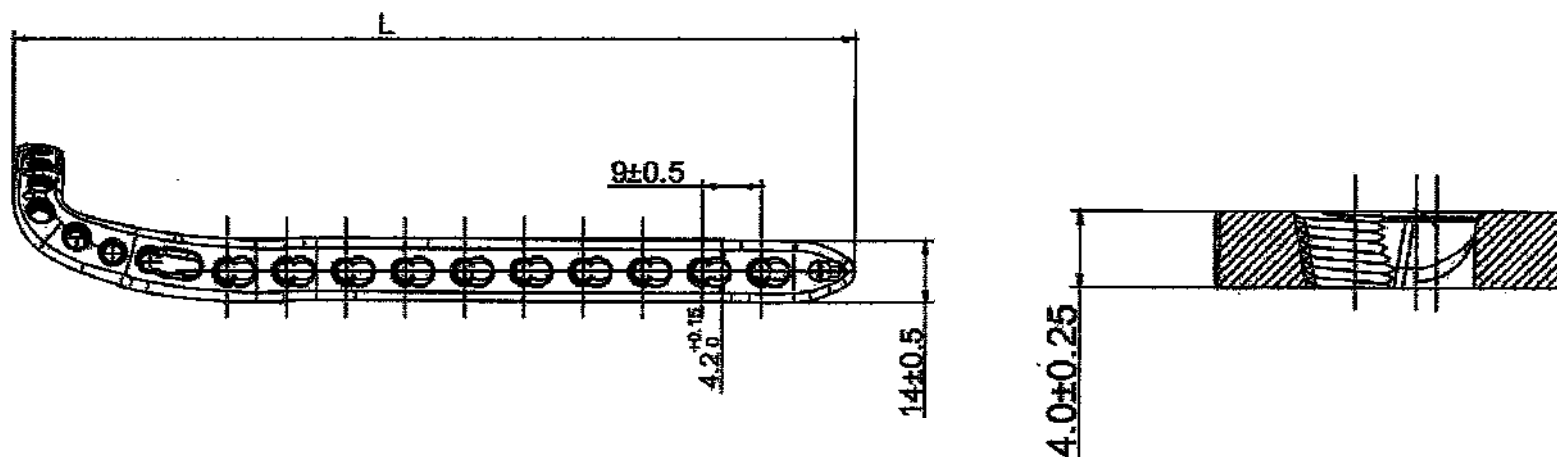


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
4 ± 0,25	14 ± 0,5	9 ± 0,5	4,2 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, mm (mm)	Отверстий (Holes), pcs	Масса с погрешностями, g ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 5	80	5	T=20.41±20% S=35.61±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 7	106	7	T=26.96±20% S=47.04±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 9	132	9	T=33.52±20% S=58.47±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 11	158	11	T=40.07±20% S=69.9±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 13	184	13	T=46.62±20% S=81.33±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 15	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 15	210	15	T=53.17±20% S=92.76±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 17	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 17	236	17	T=59.72±20% S=104.19±20%
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 19	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 19	262	19	T=66.02±20% S=115.18±20%

	размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 19			
Plate Locking compression (LCP) Anterolateral Distal Tibia YSQ 12, right/left, size 3.5 mm, head with 4 Holes, holes: 21	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 21	288	21	T=72.58±20% S=126.6±20%



Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-14 increments 2

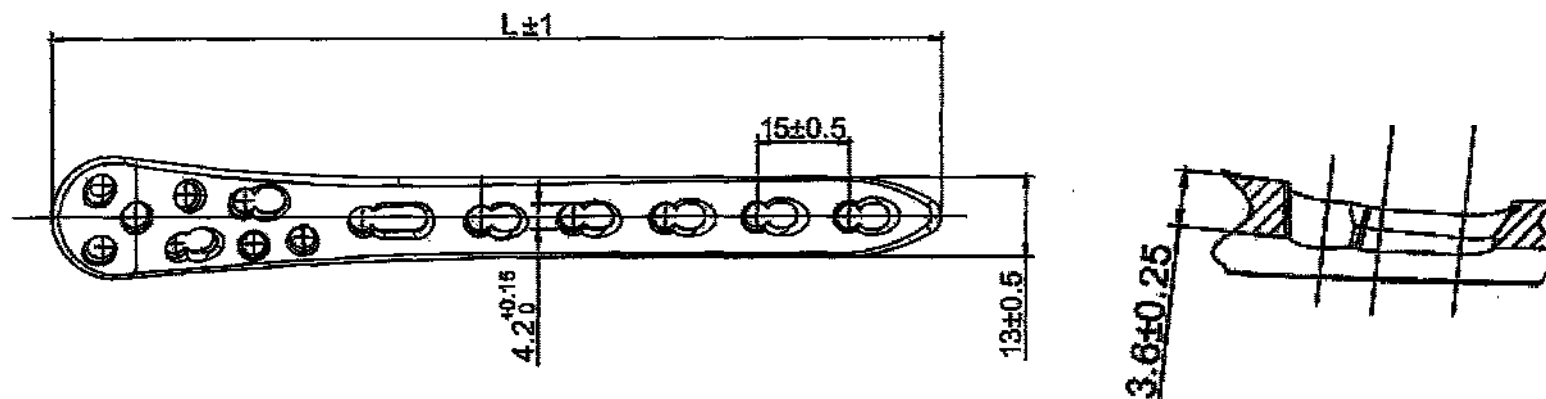

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	13 ± 0,5	15 ± 0,5	4,2 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	109	4	T=22.96±20% S=40.04±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	135	6	T=28.43±20% S=49.6±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	161	8	T=33.91±20% S=59.15±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	187	10	T=39.38±20% S=68.7±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	213	12	T=44.86±20% S=78.25±20%
Plate Locking compression (LCP) Medial Distal Tibia with Low Bend JZQ 04, right/left, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	239	14	T=50.33±20% S=87.8±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3-7 с шагом 1, 9, 11, 13 / Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 3-7 increments 1, 9, 11, 13

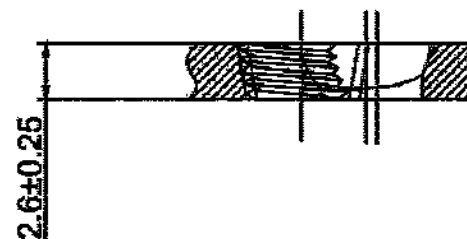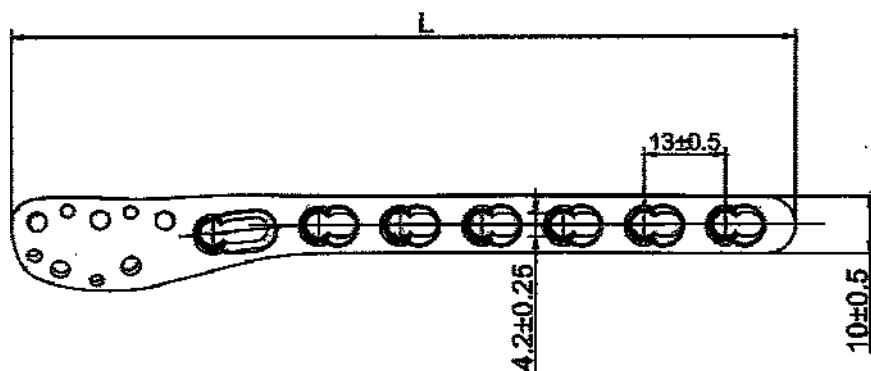


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	10 ± 0,5	13 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3	80	3	T=8.54±20% S=14.9±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 4	98	4	T=10.06±20% S=17.55±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 5	116	5	T=11.58±20% S=20.21±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 6	134	6	T=13.10±20% S=22.86±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 7	152	7	T=14.63±20% S=25.51±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 9	170	9	T=17.67±20% S=30.82±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 11	188	11	T=20.71±20% S=36.13±20%
Plate Locking compression (LCP) Lateral Distal Fibula JZQ 08, right/left, size 2.7 mm / 3.5 mm, head with 5 Holes, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5	206	13	T=23.75±20% S=41.43±20%

	мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 13			
--	---	--	--	--

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 4-12 increments 2

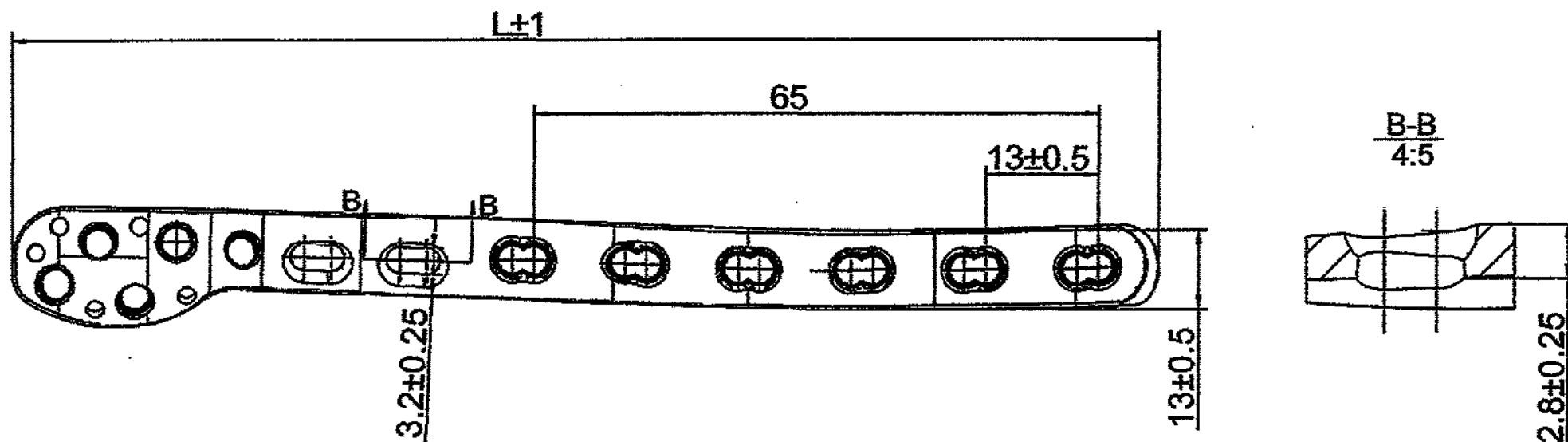

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,8 ± 0,25	13 ± 0,5	13 ± 0,5 65 ± 0,5	3,2 ± 0,25	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ±1, mm (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4	80	4	T=13.1±20% S=22.86±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	106	6	T=17.36±20% S=30.29±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	132	8	T=21.62±20% S=37.72±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	158	10	T=25.88±20% S=45.15±20%
Plate Locking compression (LCP) Periarticular Distal Lateral Fibular JZQ 08, right/left, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	184	12	T=30.14±20% S=52.58±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1, 12-22 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 5-10 increments 1, 12-22 increments 2

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,8 ± 0,25	13 ± 0,5	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 5	74	5	A=17±20% S=30±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	89	6	A=20±20% S=35±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 7	104	7	A=23±20% S=40±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	119	8	A=27±20% S=47±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 9	134	9	A=30±20% S=53±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	149	10	A=33±20% S=58±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	179	12	A=40±20% S=70±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	209	14	A=47±20% S=83±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 16	239	16	A=54±20% S=95±20%

Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 18	269	18	$A=61\pm 20\%$ $S=107\pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 20	299	20	$A=68\pm 20\%$ $S=120\pm 20\%$
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction ZSQ 12 straight, size 3.5 mm, holes: 22	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 22	329	22	$A=75\pm 20\%$ $S=132\pm 20\%$

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 6-18 с шагом 2 / Plate Locking compression Reconstruction (LCP) for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 6-18 increments 2

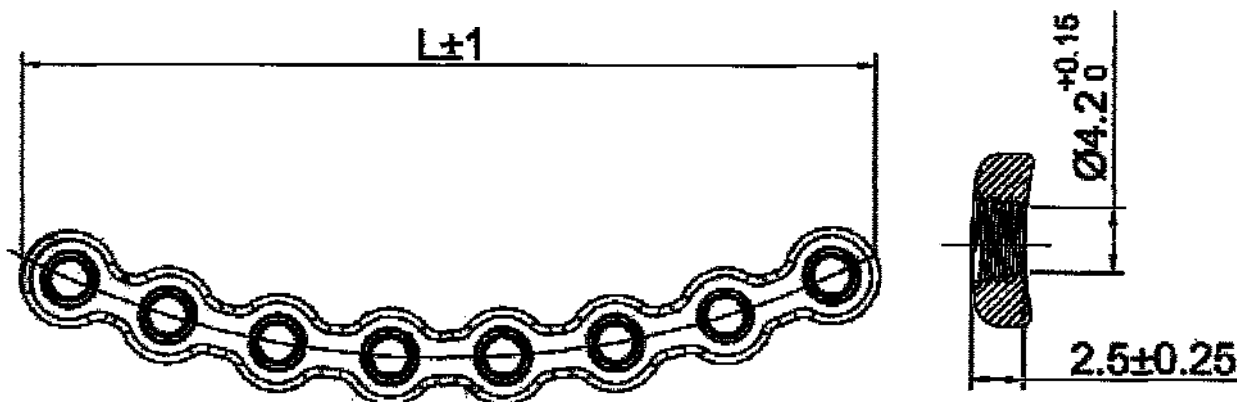


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,5 ± 0,25	4,2 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 6	78	6	T=10.53±20% S=18.37±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 8	104	8	T=14.04±20% S=24.49±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 10	130	10	T=17.55±20% S=30.62±20%
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 12	156	12	T=21.06±20% S=36.74±20%

Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 14	182	14	$T=24.59\pm20\%$ $S=42.86\pm20\%$
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 16	208	16	$T=28.08\pm20\%$ $S=48.98\pm20\%$
Plate Locking compression (LCP) Reconstruction for Pelvic YSQ 20 curved, size 3.5 mm, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 18	304	18	$T=41.04\pm20\%$ $S=71.59\pm20\%$


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 1,5 мм, отверстия: 4, 6 / Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 1.5 mm, holes: 4, 6

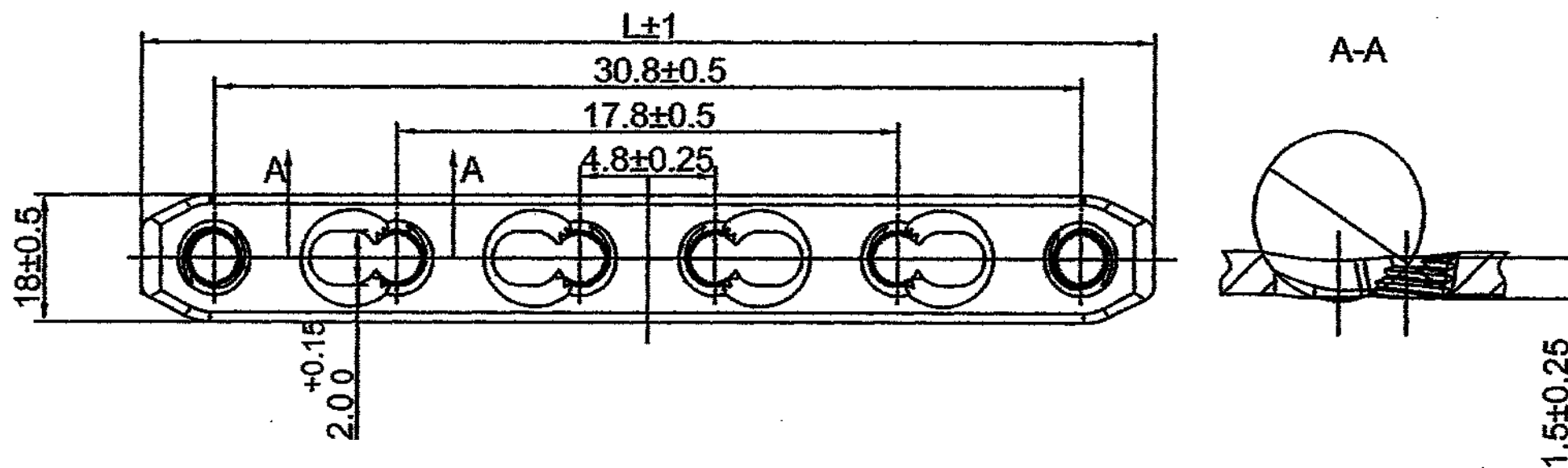

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	18 ± 0,5	2 ^{+0,15} ₀	4,8 ± 0,25 17,8 ± 0,5 30,8 ± 0,5	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± l, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 1.5 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 1,5 мм, отверстия: 4	24	4	T=0.5±20% S=0.87±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 1.5 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 1,5 мм, отверстия: 6	36	6	T=0.78±20% S=1.36±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1, 10 / Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 4-8 increments 1, 10

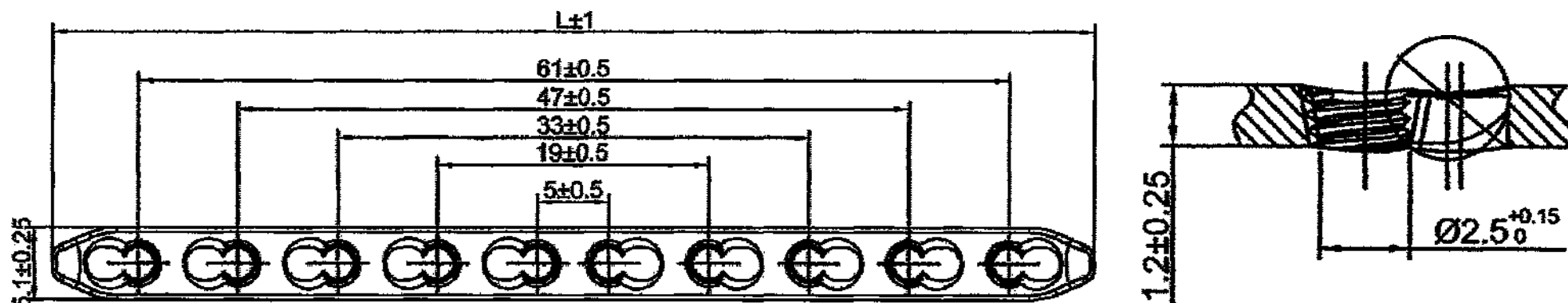

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5,1 ± 0,5	2 ₀ ^{+0,15}	2,5 ₀ ^{+0,15}	5 ± 0,5 19±0,5 33±0,5 47±0,5 61±0,5	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L±l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 4	21	4	T=0.85±20% S=1.49±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 5	38	5	T=1.05±20% S=1.83±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 6	45	6	T=1.24±20% S=2.16±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 7	52	7	T=1.43±20% S=2.5±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 8	59	8	T=1.62±20% S=2.83±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.0 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм, отверстия: 10	73	10	T=1.82±20% S=3.17±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1, 10 / Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 4-8 increments 1, 10

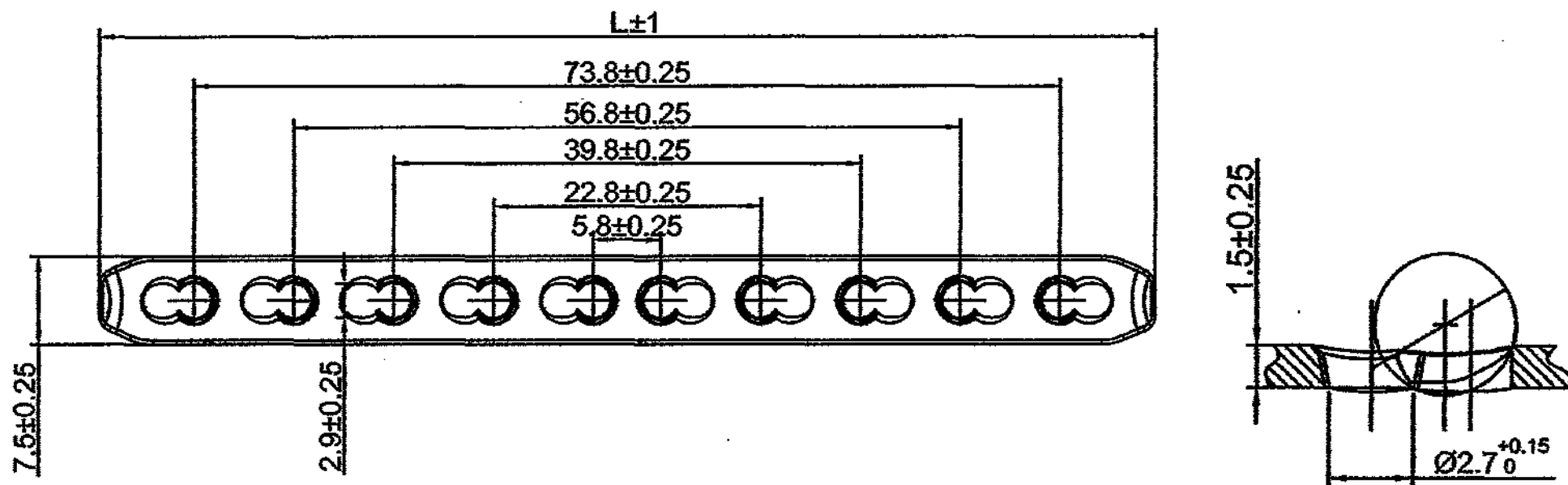

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm; outside/inner/others
1,5 ± 0,25	7,5 ± 0,5	2,9 ± 0,25	2,7 ^{+0.15} ₀	5,8 ± 0,25 22,8 ± 0,25 39,8 ± 0,25 56,8 ± 0,25 73,8 ± 0,25	0,4 0,8 1,6


Description	Описание	L ± l, mm (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 4	39	4	T=2.01±20% S=3.51±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 5	47,5	5	T=1.46±20% S=2.54±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 6	56	6	T=1.86±20% S=3.25±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 7	64,5	7	T=2.27±20% S=3.96±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 8	73	8	T=2.67±20% S=4.66±20%
Plate Locking compression (LCP) Straight ZSQ 09, size 2.4 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,4 мм, отверстия: 10	90	10	T=3.08±20% S=5.37±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переходная ZEQ 03, размер 2,0 мм, отверстия: 12 / Plate Locking compression (LCP) Adaption ZEQ 03, size 2.0mm, holes: 12

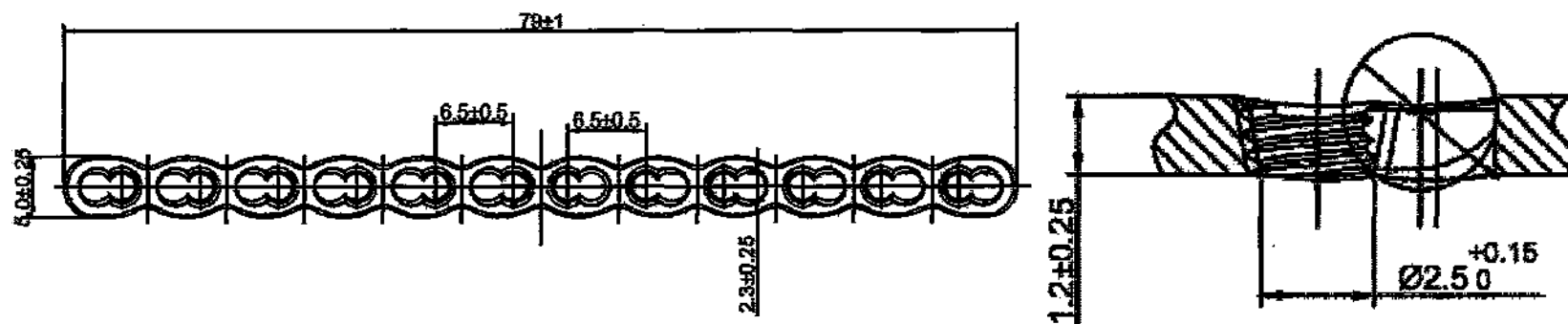


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
79±1	1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	2,5 ₀ ^{+0.15}	2,3 ± 0,25	6,5 ± 0,5	T=2.01±20% S=3.51±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переходная ZEQ 03, размер 2,4 мм, отверстия: 12 / Plate Locking compression (LCP) Adaption ZEQ 03, size 2.4mm, holes: 12

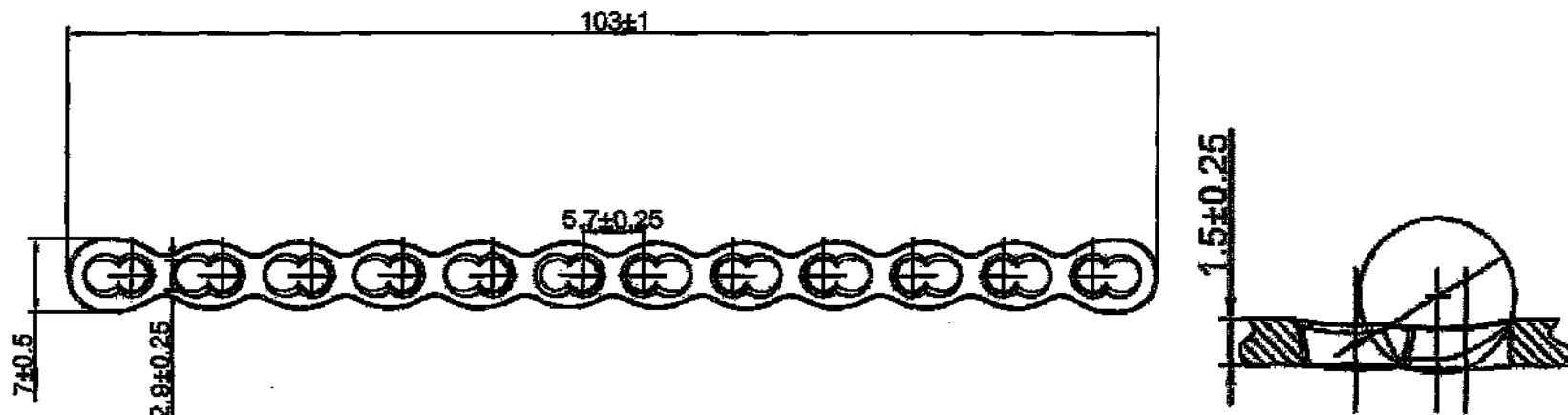


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ±	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
103±1	1,5 ± 0,25	7 ± 0,5	2,9 ± 0,25	5,7 ± 0,25	T=3.56±20% S=6.22±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) мыщелковая YSQ 01, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7 / Plate Locking compression (LCP) Condylar YSQ 01 size 2.0 mm, head with two Holes, holes 7

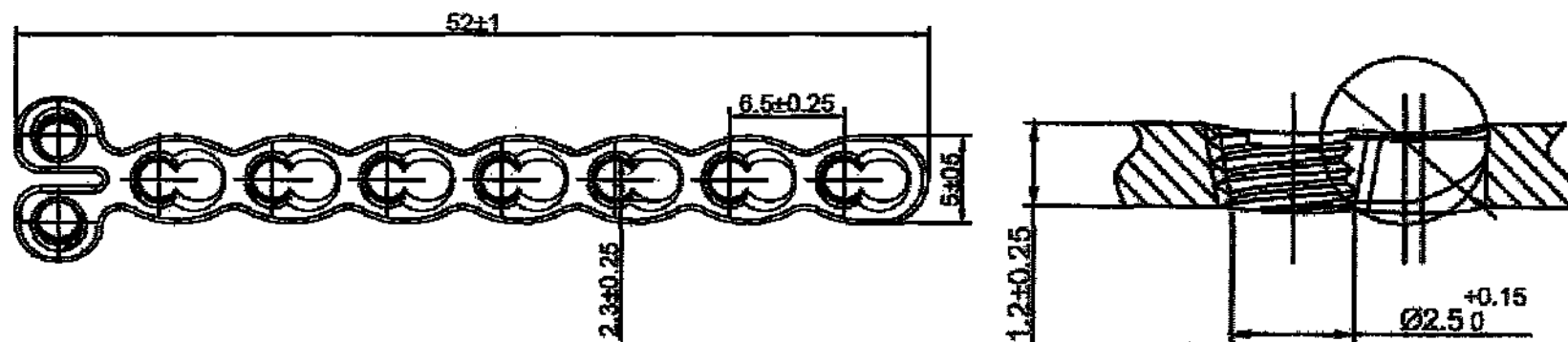

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/други
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
52±1	1,2 ± 0,25	5 ± 0,5	2,5 ^{+0.15} ₀	2,3 ± 0,25	6,5 ± 0,25	7	T=1.43±20% S=2.5±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) мыщелковая YSQ 01, размер 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7 / Plate Locking compression (LCP) Condylar YSQ 01 size 2.4 mm, head with two Holes, holes 7

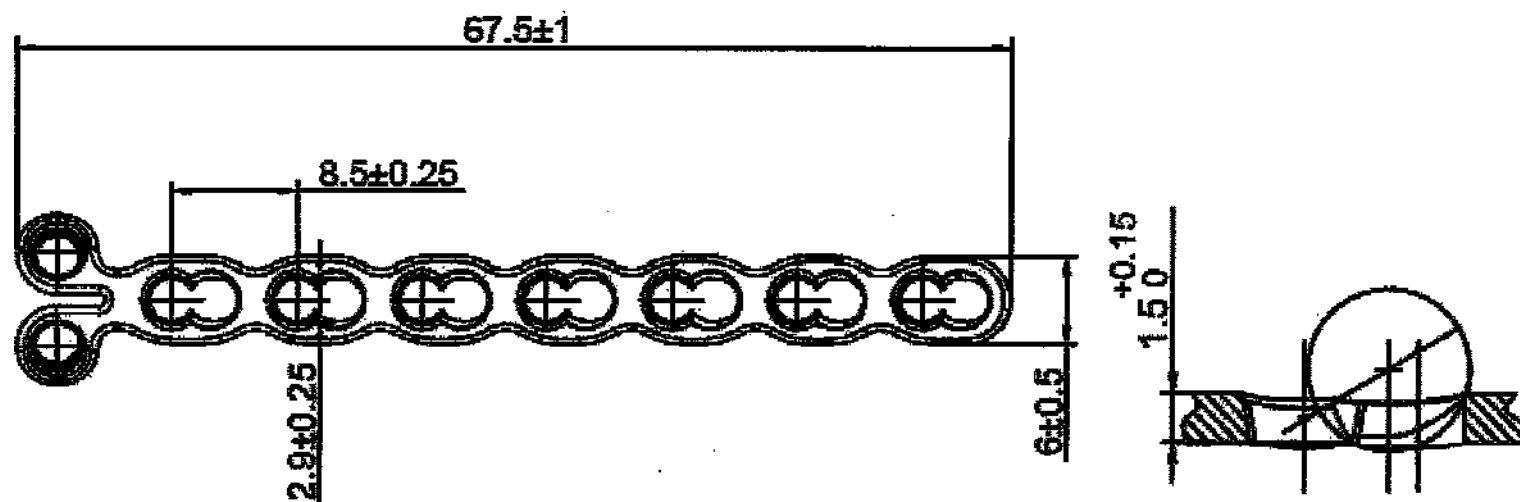


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
67,5±1	1,5 ₀ ^{+0,15}	6 ± 0,5	2,9 ± 0,25	8,5 ± 0,25	7	T=2.39±20% S=4.17±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) вращательная коррекционная YSQ 02, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 4, 5 / Plate Locking compression (LCP) Rotation Correction YSQ 02 size 2.0 mm, head with two Holes, holes: 4, 5

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Rotation Correction YSQ 02 size 2.0 mm, head with two Holes, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) вращательная коррекционная YSQ 02, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 4	33	4	T=1.11±20% S=1.94±20%
Plate Locking compression (LCP) Rotation Correction YSQ 02 size 2.0 mm, head with two Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) вращательная коррекционная YSQ 02, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5	40	5	T=1.35±20% S=2.35±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для сращения запястья ZSQ 09, короткий изгиб, длина 118 мм / Plate Locking compression (LCP) Wrist Fusion ZSQ 09, short bend, length 118 mm

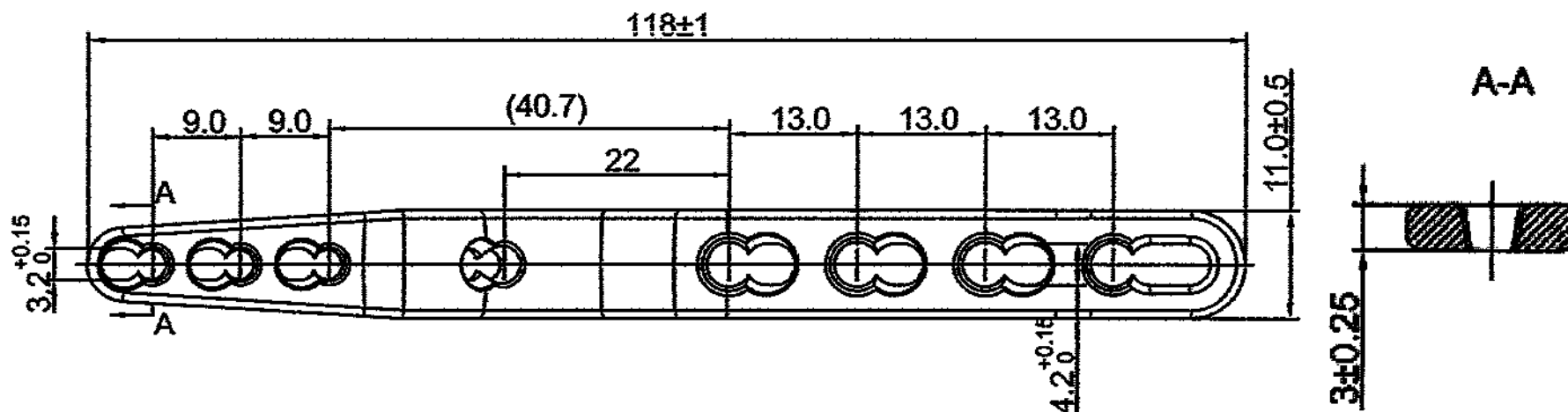

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм мм ± мм	Масса с погрешностями, г г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
118±1	3 ± 0,25	11 ± 0,5	3,2 ^{+0.15} ₀ 4,2 ^{+0.15} ₀	9 ± 0,5 13 ± 0,5 22 ± 0,5 40,7 ± 0,25	T=7.76±20% S=13.54±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для сращения запястья ZSQ 09, стандартный изгиб, длина 118 мм / Plate Locking compression (LCP) Wrist Fusion ZSQ 09, Standard bend, length 118 mm

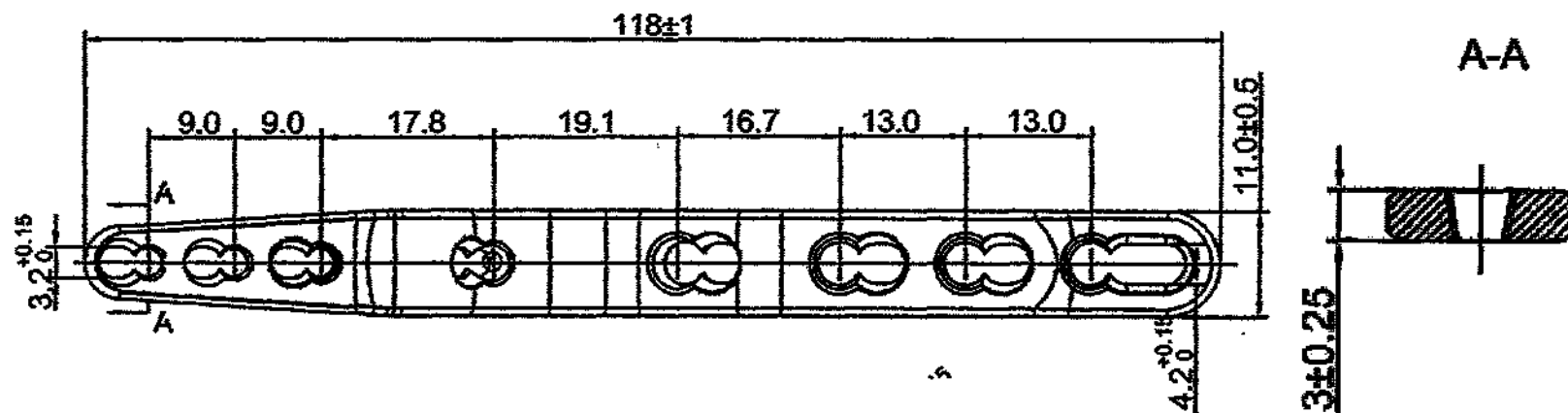


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм мм ± мм	Расстояние между отверстиями, мм мм ± мм	Масса с погрешностями, г г ±	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
118±1	3 ± 0,25	11 ± 0,5	3,2 ^{+0,15} ₀ 4,2 ^{+0,15} ₀	9 ± 0,5 13 ± 0,5 16,7 ± 0,25 17,8 ± 0,25 19,1 ± 0,25	T=9.34±20% S=16.3±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина фиксирующая компрессионная(LCP) для сращения запястья ZSQ 09, прямая, длина 112 мм / Plate Locking compression(LCP) Wrist Fusion ZSQ 09, straight, length 112 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
112±2	2 ± 0,25	8,8 ± 0,5	T=9.34±20% S=16.3±20%	0,8 1,6 3,2



Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, 4, 5, 7, угол: 100-150° с шагом 10° / Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, 4, 5, 7 mm, angles 100-150° increments 10°

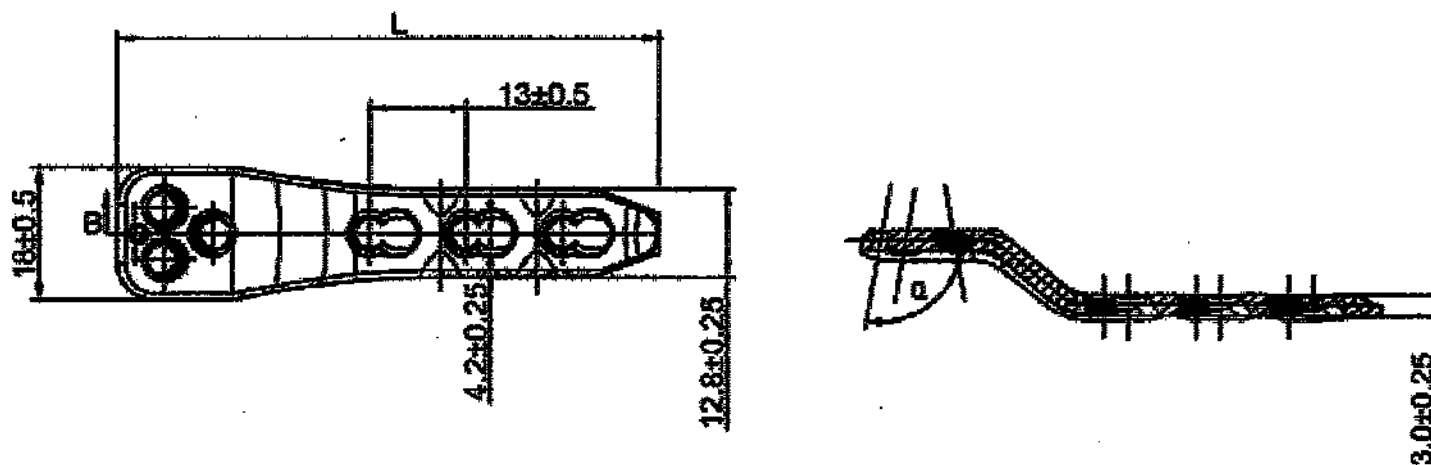

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate head width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3 ± 0,25	12,8 ± 0,25	18 ± 0,5	13 ± 0,5	4,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	α, °	Масса погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, angles 100	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, угол: 100	73	3	100	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, angles 110 (offset value 8mm)	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, угол: 110 (значение смещения 8 мм)	73	3	110	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, angles 110 (Offset value 12mm)	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, угол: 110 (значение смещения 12 мм)	73	3	110	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 4, angles 120	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 4, угол: 120	75	4	120	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, angles 130	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, угол: 130	62	3	130	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 5, angles 130	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 5, угол: 130	88	5	130	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 7, angles 130	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 7, угол: 130	114	7	130	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, angles 140	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, угол: 140	70	3	140	T=12.61±20% S=22.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 3.5 mm, holes 3, angles 150	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстий 3, угол: 150	58	3	150	T=12.61±20% S=22.01±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстий 3, 4, 5, 7, угол: 100-150° с шагом 10° / Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5.0 mm, holes 3, 4, 5, 7 mm, angles 100-150° increments 10°

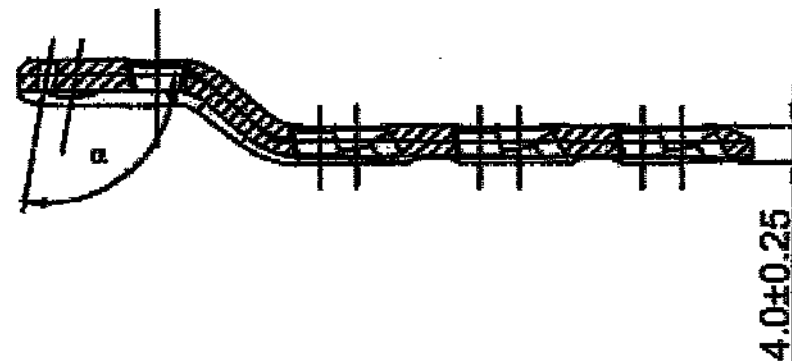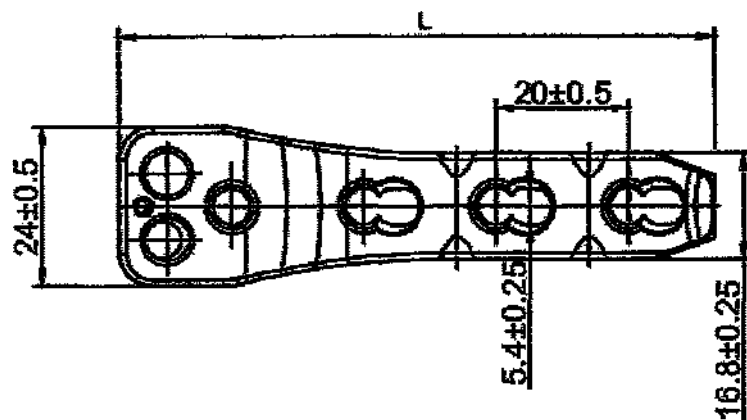

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate head width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	16,8 ± 0,25	24 ± 0,5	20 ± 0,5	5,4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Отверстий шт (pcs)	α, °	Масса погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 3, angles 100	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 3, угол: 100	90	3	100	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 3, angles 110 (offset value 8mm))	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 3, угол: 110 (значение смещения 8 мм)	90	3	110	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 3, angles 110 ((offset value 12mm))	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 3, угол: 110 (значение смещения 12 мм)	90	3	110	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 4, angles 120	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 4, угол: 120	95	4	120	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 3, angles 130	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 3, угол: 130	79	3	130	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 5, angles 130	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 5, угол: 130	111	5	130	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 7, angles 130	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 7, угол: 130	143	7	130	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 3, angles 140	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 3, угол: 140	90	3	140	T=27.22±20% S=47.48±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Hip YSQ 19, size 5 mm, holes 3, angles 150	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 5 мм, отверстий 3, угол: 150	74	3	150	T=27.22±20% S=47.48±20%


Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1 / Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 5-10 increments 1

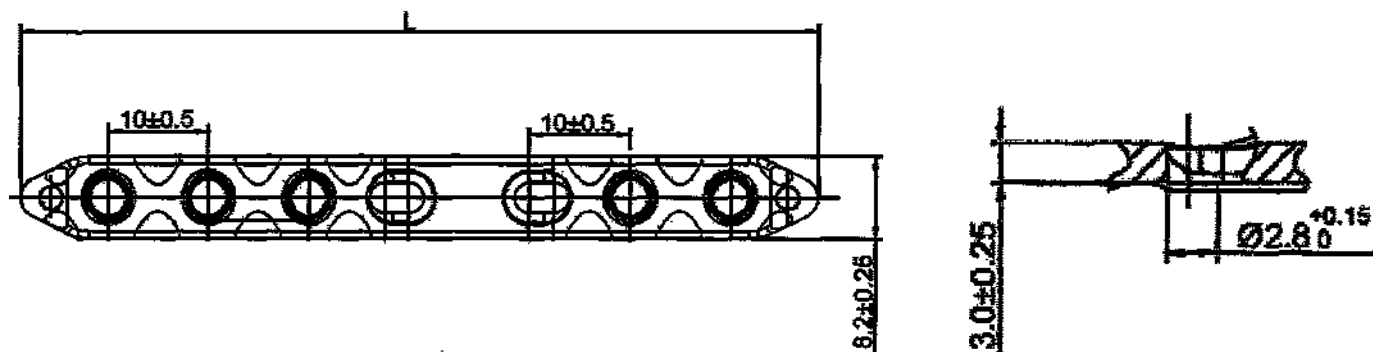

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	8,2 ± 0,25	2,8 ₀ ^{+0,15}	5,4 ± 0,25	10 ± 0,5	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 5	50	5	T=5.04±20% S=8.79±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 6	60	6	T=6.64±20% S=11.59±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 7	70	7	T=7.75±20% S=13.52±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 8	80	8	T=8.86±20% S=15.45±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 9	90	9	T=9.96±20% S=17.38±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 2.7 mm, holes 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 10	100	10	T=11.07±20% S=19.31±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 5-12 с шагом 1 / Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 5-12 increments 1

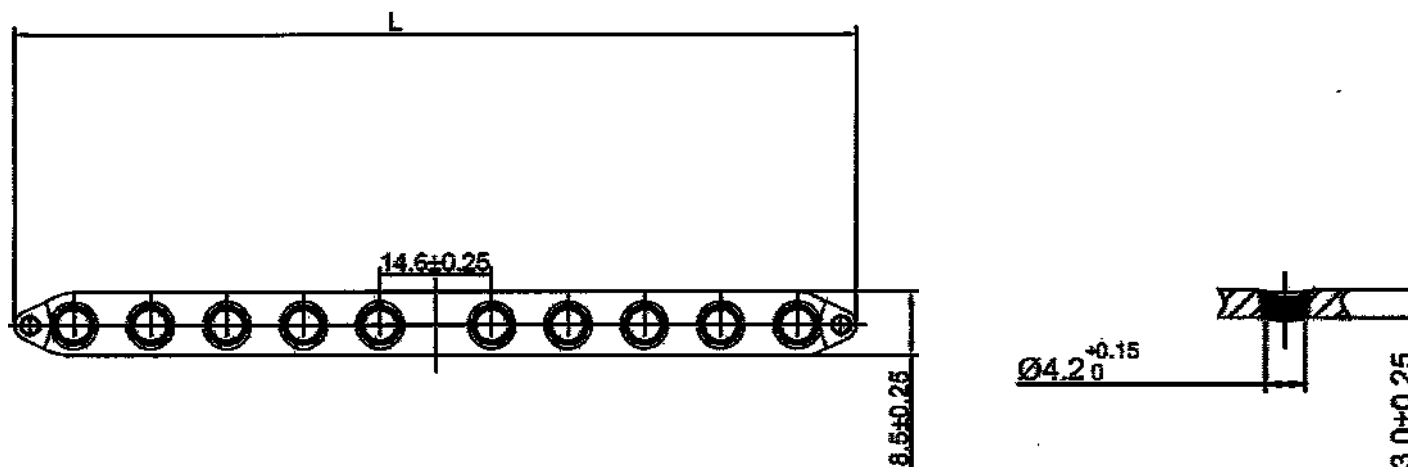

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	8,25 ± 0,25	4,2 ^{+0.15} ₀	14,6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 5	50	5	T=5.74±20% S=10.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 6	60	6	T=6.89±20% S=12.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 7	70	7	T=8.03±20% S=14.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 8	80	8	T=9.18±20% S=16.01±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 9	90	9	T=10.33±20% S=18.02±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 10	100	10	T=11.48±20% S=20.02±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Straight with Limited Contact YSQ 19, size 3.5 mm, holes 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 12	120	12	T=13.77±20% S=24.02±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 8, 10, 12 / Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 4 holes, EXTRALARGE holes: 8, 10, 12

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 4 holes, EXTRALARGE holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 8	92	8	T=6.62±20% S=11.55±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 4 holes, EXTRALARGE holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 10	110	10	T=7.92±20% S=13.81±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 4 holes, EXTRALARGE holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 12	128	12	T=9.21±20% S=16.08±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 5ю отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 8, 10, 12 / Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 5 holes, EXTRALARGE holes: 8, 10, 12

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 5 holes, EXTRALARGE holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 8	94	8	T=6.76±20% S=11.8±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 5 holes, EXTRALARGE holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 10	112	10	T=8.06±20% S=14.07±20%
Plate Locking compression (LCP) Extra-articular Volar Distal Radius Plate, YSQ 09 right/left, size 2.4 mm, head with 5 holes, EXTRALARGE holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 12	130	12	T=9.36±20% S=16.32±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для мыщелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 5-11 с шагом 2 / Plate Locking compression (LCP) for Condylar Distal Femur JZQ 05 right/left, size 5.0 mm, holes: 5-11 increments 2

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	16 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Л-12, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) for Condylar Distal Femur JZQ 05 right/left, size 5.0 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для мыщелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 5	156	5	T=67.39±20% S=117.5±20%
Plate Locking compression (LCP) for Condylar Distal Femur JZQ 05 right/left, size 5.0 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для мыщелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 7	196	7	T=84.67±20% S=147.7±20%
Plate Locking compression (LCP) for Condylar Distal Femur JZQ 05 right/left, size 5.0 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для мыщелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 9	236	9	T=101.95±20% S=177.8±20%
Plate Locking compression (LCP) for Condylar Distal Femur JZQ 05 right/left, size 5.0 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для мыщелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 11	276	11	T=119.23±20% S=207.9±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская для шейки бедра YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстий 2, угол: 100°, 110°, 130° / Plate Locking compression (LCP) Pediatric for Hip YSQ 19, size 2.7 mm, holes 2, angles: 100°, 110°, 130°

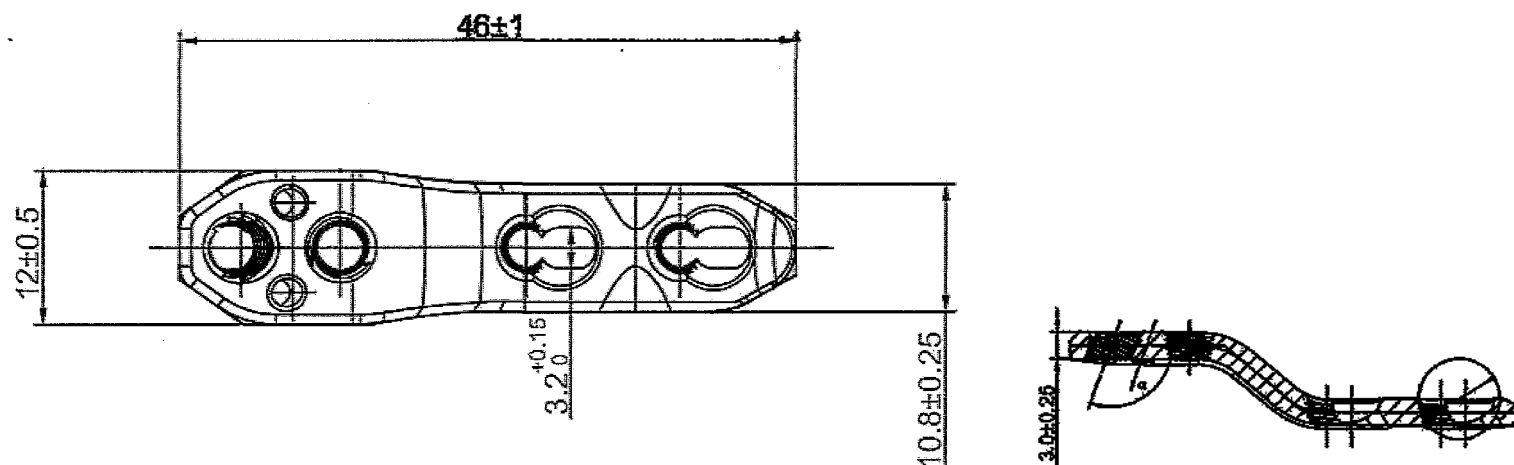

Длина пластины с погрешностями, мм ± mm	Толщина пластины с погрешностями, мм mm ± mm	Ширина головки пластины с погрешностями, мм mm ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм mm ± mm	Ширина отверстия с погрешностями, мм mm ± mm	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate head width with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
46±1	3 ± 0,25	12 ± 0,5	10,8 ± 0,25	3,2 ^{+0.15} ₀	7	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	α, °	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression Pediatric for Hip YSQ 19, size 2.7 mm, holes 2, angles: 100	Пластина фиксирующая компрессионная детская для шейки бедра YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстий 2, угол: 100°	100	T=4.97±20% S=8.67±20%
Plate Locking compression Pediatric for Hip YSQ 19, size 2.7 mm, holes 2, angles: 110	Пластина фиксирующая компрессионная детская для шейки бедра YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстий 2, угол: 110°	110	T=4.97±20% S=8.67±20%
Plate Locking compression Pediatric for Hip YSQ 19, size 2.7 mm, holes 2, angles: 130	Пластина фиксирующая компрессионная детская для шейки бедра YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстий 2, угол: 130°	130	T=4.97±20% S=8.67±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская мышцелковая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстия: 3, 5, 7, угол: 90° / Plate Locking compression (LCP) Pediatric Condylar YSQ 19, size 5.0 mm, holes 3, 5, 7, angles: 90°

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	22,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L, ±L, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	α, °	Масса погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Condylar YSQ 19, size 5.0 mm, holes 3, angles: 90°	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская мышцелковая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстия: 3, угол: 90°	75	3	90	T=27.33±20% S=47.68±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Condylar YSQ 19, size 5.0 mm, holes 5, angles: 90°	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская мышцелковая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстия: 5, угол: 90°	95	5	90	T=34.62±20% S=60.4±20%
Plate Locking compression (LCP) Pediatric Condylar YSQ 19, size 5.0 mm, holes 7, angles: 90°	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская мышцелковая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстия: 7, угол: 90°	115	7	90	T=41.92±20% S=73.12±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм / Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	20 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	229	12	T=123.66±20% S=215.71±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	265	14	T=142.3±20% S=249.63±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	300	16	T=162±20% S=282.6±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	336	18	T=181.44±20% S=316.51±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	372	20	T=200.88±20% S=350.42±20%

Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	408	22	T=220.32±20% S=384.33±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	443	24	T=239.22±20% S=417.3±20%
Plate Locking compression (LCP) Curved Broad with Cable JZQ 03, size 4.5 mm, holes x length: 12x229 mm, 14x265 mm, 16x300 mm, 18x336 mm, 20x372 mm, 22x408 mm, 24x443 mm, 26x479 mm	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм	479	26	T=258.66±20% S=451.21±20%

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) / Plate Medial Locking compression (LCP)

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) передняя для ключицы JSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8 / Plate Medial Locking compression (LCP) Anterior for Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 6, 7, 8

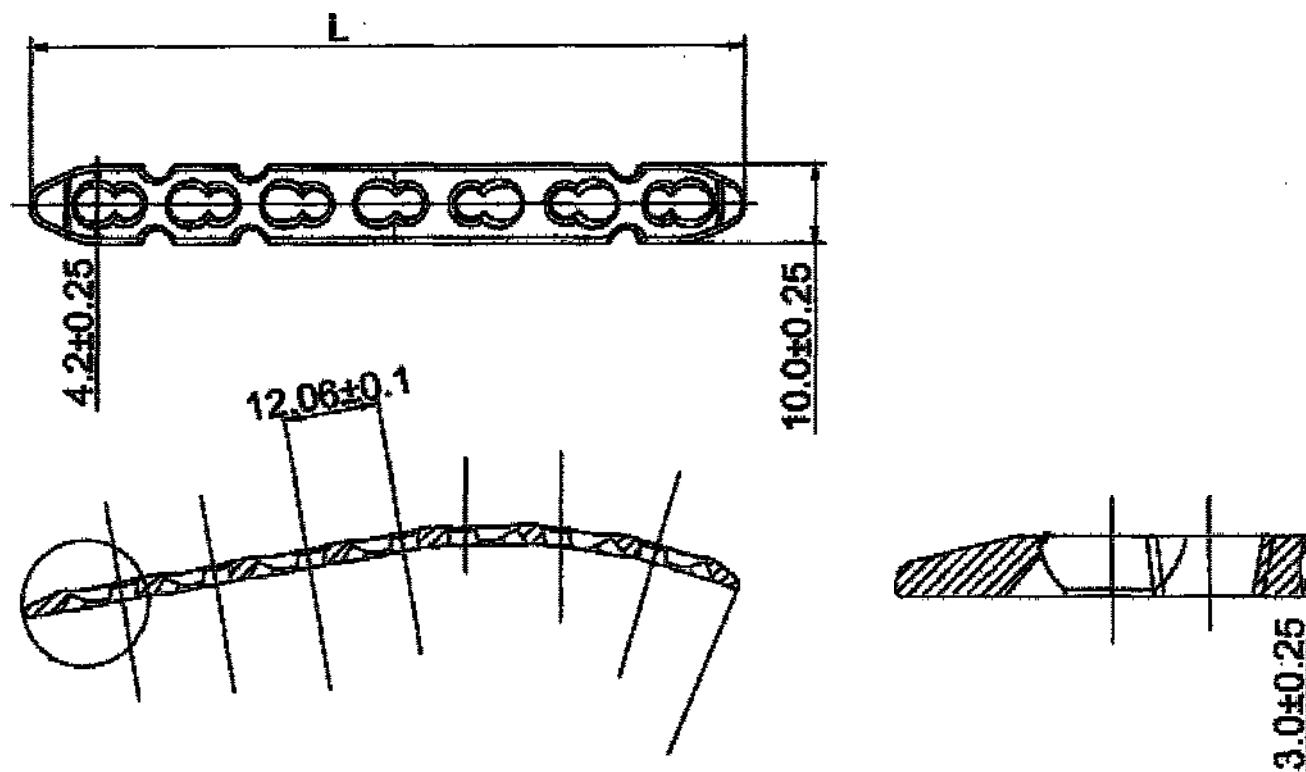

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	10 ± 0,25	4,2 ± 0,25	12,06 ± 0,1	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Medial Locking compression (LCP) Anterior for Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) передняя для ключицы JSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия: 6	79	6	T=4.09±20% S=7.13±20%
Plate Medial Locking compression (LCP) Anterior for Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) передняя для ключицы JSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия: 7	91	7	T=5.44±20% S=9.49±20%
Plate Medial Locking compression (LCP) Anterior for Clavicle JSQ 01, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) передняя для ключицы JSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия: 8	102	8	T=6.79±20% S=11.84±20%

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная для бедренной кости ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4x121 мм / Plate Medial Locking compression (LCP) Distal for Femur ZSQ 05, size 4.5 mm, holes x length: 4x121 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Отверстий, шт	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Holes, pcs	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
112±1	2 ± 0,25	8 ± 0,25	4	T=8.71±20% S=15.19±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем / Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable

Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 3x137 мм, 5x185 мм, 7x233 мм, 9x281 мм, 11x329 мм / Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 3x137 mm, 5x185 mm, 7x233 mm, 9x281 mm, 11x329 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
6 ± 0,25	20 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1 mm (mm)	Отверстий (Holes), pcs	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 3x137 mm	Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 3x137 мм	137	3	T=73.98±20% S=129.05±20%
Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 5x185 mm	Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 5x185 мм	185	5	T=99.9±20% S=174.27±20%
Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 7x233 mm	Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 7x233 мм	233	7	T=125.82±20% S=219.48±20%
Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 9x281 mm	Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 9x281 мм	281	9	T=151.74±20% S=264.7±20%
Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, long, right/left, size 4.5 mm, holes x length: 11x329 mm	Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 11x329 мм	329	11	T=177.66±20% S=309.91±20%

Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, короткая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 1x83 мм / Plate Trochanteric Locking compression (LCP) with Grip Cable JZQ 03, short, size 4.5 mm, holes x length: 1x83 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Отверстий, шт	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Holes, pcs	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, mm, outside/inner/others
83±1	6 ± 0,25	20 ± 0,25	1	T=44.82±20% S=78.18±20%	0,8 1,6 3,2

Штифт установочный для серкляжа JZQ 02, размер 5,0 мм / Pin Positioning for Cerclage JZQ 02, size 5.0 mm

Длина с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Length with tolerance, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Diameter with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm: outside/inner/others
11,5±0,25	9 ± 0,25	T=3.3±20% S=5.74±20%	5,0 ⁰ _{-0,15}	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP)

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 6x170 мм, 8x206 мм, 10x242 мм, 12x278 мм, 14x314 мм, 16x350 мм, 18x386 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 6x170 mm, 8x206 mm, 10x242 mm, 12x278 mm, 14x314 mm, 16x350 mm, 18x386 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 6x170 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 6x170 мм	170	6	T=49.57±20% S=86.47±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 8x206 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 8x206 мм	206	8	T=44.17±20% S=104.78±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 10x242 mm,	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 10x242 мм	242	10	T=51.89±20% S=123.1±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 12x278 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 12x278 мм	278	12	T=81.06±20% S=141.41±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 14x314 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 14x314 мм	314	14	T=91.56±20% S=159.72±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мыщелковая	350	16	T=102.06±20% S=178.03±20%

01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 16x350 mm	изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 16x350 мм			
Plate.Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Condylar Curved JSQ 01, right/left, size 5,0 mm, holes x length: 18x386 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мышелковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 18x386 мм	386	18	T=112.55±20% S=196.35±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4x87 мм, 6x117 мм, 8x147 мм, 10x177 мм, 12x207 мм, 14x237 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 4x87 mm, 6x117 mm, 8x147 mm, 10x177 mm, 12x207 mm, 14x237 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	14 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 4x87 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4x87 мм	87	4	T=21.92±20% S=39.24±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 6x117 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 6x117 мм	117	6	T=29.48±20% S=51.43±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 8x147 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 8x147 мм	147	8	T=37±20% S=64.62±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 10x177 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 10x177 мм	177	10	T=44.6±20% S=77.81±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 12x207 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06,	207	12	T=52.16±20% S=90.99±20%

	правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 12x207 мм			
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JSQ 06, right/left, size 3,5 mm, holes x length: 14x237 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 14x237 мм	237	14	T=59.72±20% S=104.18±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная боковой плечевой фиксации (PLHP) JSQ 06, размер 3,5 мм. отверстия x длина: 5x85 мм, 8x121 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Humerus Plate (PLHP) JSQ 06, size 3,5 mm, holes x length: 5x85 mm, 8x121 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,2 ± 0,25	11,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Humerus Plate (PLHP) JSQ 06, size 3,5 mm, holes x length: 5x85 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная боковой плечевой фиксации (PLHP) JSQ 06, размер 3,5 мм. отверстия x длина: 5x85 мм	85	5	T=9.67±20% S=16.88±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Humerus Plate (PLHP) JSQ 06, size 3,5 mm, holes x length: 8x121 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная боковой плечевой фиксации (PLHP) JSQ 06, размер 3,5 мм. отверстия x длина: 8x121 мм	121	8	T=13.77±20% S=24.03±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x73 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x73 mm

Длина с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, mm, outside/inner/others
73±1	3 ± 0,25	12 ± 0,25	T=11.8±20% S=20.6±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x90 мм, 4x116 мм, 6x142 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x90 mm, 4x116 mm, 6x142 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x90 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x90 мм	90	2	T=14.58±20% S=25.43±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 4x116 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x116 мм	116	4	T=18.79±20% S=32.78±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Olecranon ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 6x142 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x142 мм	142	6	T=23±20% S=40.12±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x131 мм, 8x157 мм, 10x184 мм, 12x211 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Ulna, extra articular ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 6x131 mm, 8x157 mm, 10x184 mm, 12x211 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes) шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Ulna, extra articular ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 6x131 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x131 мм	131	6	T=21.22±20% S=37±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Ulna, extra articular ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 8x157 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 8x157 мм	157	8	T=25.43±20% S=44.36±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Ulna, extra articular ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 10x184 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 10x184 мм	184	10	T=29.8±20% S=51.99±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Ulna, extra articular ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 12x211 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 12x211 мм	211	12	T=34.18±20% S=59.62±20%


Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 6x85 мм, 7x94 мм, 8x103 мм, 9x112 мм, 11x121 мм, 13x130 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 6x85 mm, 7x94 mm, 8x103 mm, 9x112 mm, 11x121 mm, 13x130 mm

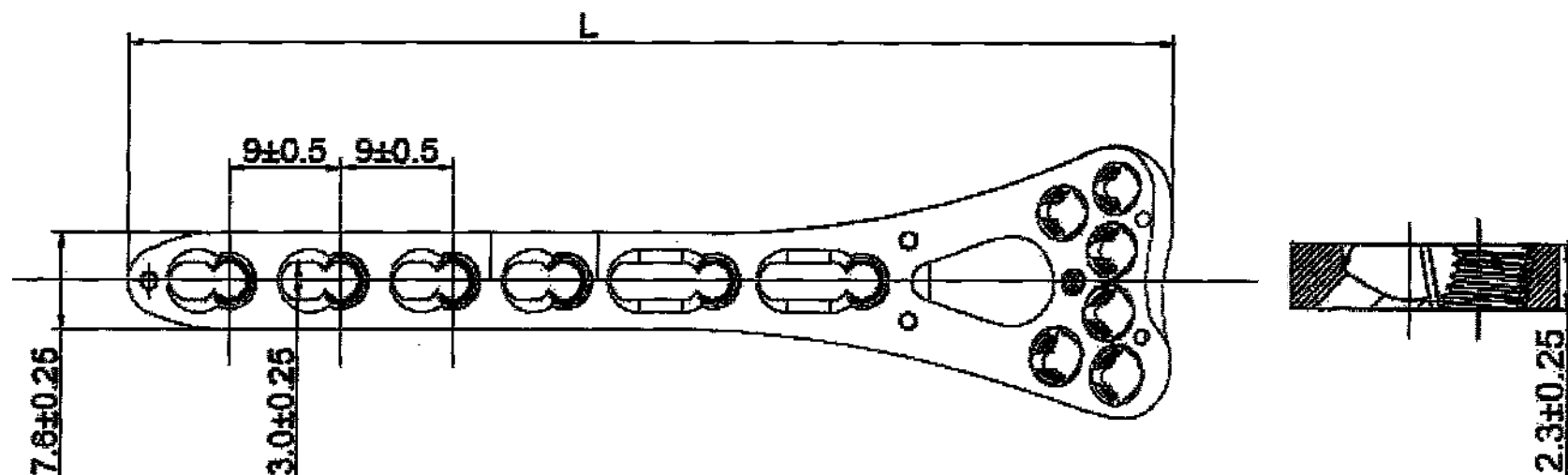

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
$2,3 \pm 0,25$	$7,6 \pm 0,25$	$3 \pm 0,25$	$9 \pm 0,5$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 6x85 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 6x85 мм	85	6	T=6.68±20% S=11.66±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 7x94 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 7x94 мм	94	7	T=7.39±20% S=12.9±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 8x103 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 8x103 мм	103	8	T=8.1±20% S=14.13±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 9x112 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 9x112 мм	112	9	T=8.81±20% S=15.37±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 11x121 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 11x121 мм	121	11	T=9.51±20% S=16.6±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar Distal JZQ 03, head with 6 holes, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 13x130 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 13x130 мм	130	13	T=10.23±20% S=17.84±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) волярная дистальная лучевая JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстий 5 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) volar Rim Distal Radius JZQ 04, right/left, size 2.4 mm, head with 6 Holes, holes 5

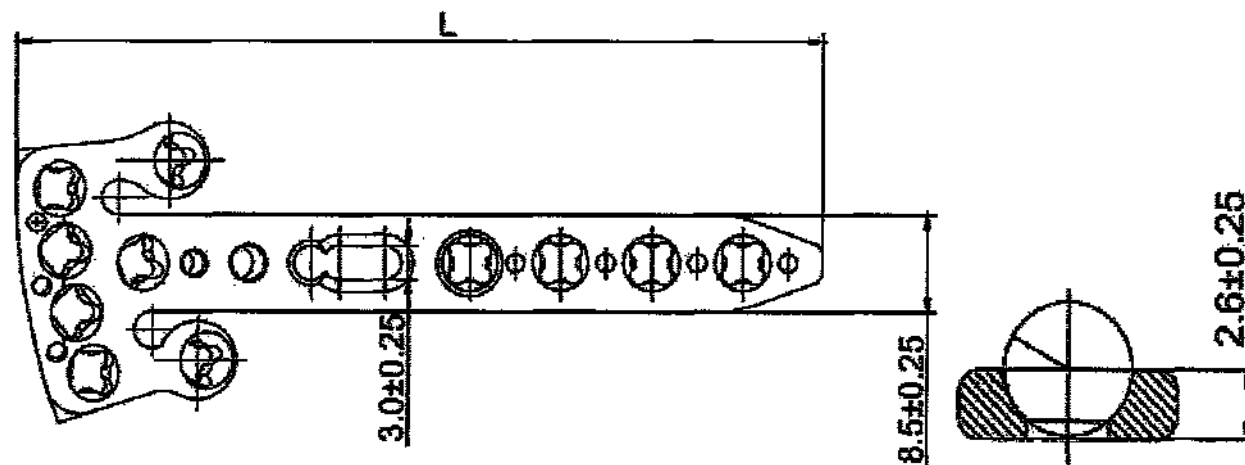

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины (L) с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстий с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ±	Неровность, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length (L) with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	57 ± 1	8,5 ± 0,25	3 ± 0,25	5	T=5.67±20% S=9.89±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) передняя для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x102 мм, 4x118 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterior for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 3x102 mm, 4x118 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterior for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 3x102 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) передняя для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x102 мм	102	3	T=49.57±20% S=80.99±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterior for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 4x118 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) передняя для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 4x118 мм	118	4	T=57.34±20% S=93.69±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) верхняя передняя для ключицы ZSQ 04, с поперечным удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x105 мм, 7x120 мм, 8x130 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Superior Anterior for Clavicle ZSQ 04, with lateral extension, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 6x105 mm, 7x120 mm, 8x130 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	10 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Superior Anterior for Clavicle ZSQ 04, with lateral extension, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 6x105 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) верхняя передняя для ключицы ZSQ 04, с поперечным удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x105 мм	105	6	T=17±20% S=29.67±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Superior Anterior for Clavicle ZSQ 04, with lateral extension, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 7x120 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) верхняя передняя для ключицы ZSQ 04, с поперечным удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 7x120 мм	120	7	T=19.44±20% S=33.9±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Superior Anterior for Clavicle ZSQ 04, with lateral extension, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 8x130 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) верхняя передняя для ключицы ZSQ 04, с поперечным удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 8x130 мм	130	8	T=21.06±20% S=36.74±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для большеберцовой, таранной и пяточной JSQ 06, правая/левая, отверстия x длина: 3x102 мм, 4x118 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterior for Tibiototalcaneal JSQ 06, right/left, holes x length: 3x102 mm, 4x118 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness μm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterior for Tibiototalcaneal JSQ 06, right/left, holes x length: 3x102 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для большеберцовой, таранной и пяточной JSQ 06, правая/левая, отверстия x длина: 3x102 мм	102	6	T=49.57±20% S=80.98±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterior for Tibiototalcaneal JSQ 06, right/left, holes x length: 4x118 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для большеберцовой, таранной и пяточной JSQ 06, правая/левая, отверстия x длина: 4x118 мм	118	7	T=57.34±20% S=93.69±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с четырьмя отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 3x47 мм, 5x65 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 4 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 3x47 mm, 5x65 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 4 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 3x47 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с четырьмя отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 3x47 мм	47	3	T=3.38±20% S=5.9±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 4 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 5x65 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с четырьмя отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x65 мм	65	5	T=4.68±20% S=8.16±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с пятью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 3x47 мм, 5x65 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 5 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 3x47 mm, 5x65 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 5 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 3x47 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с пятью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 3x47 мм	47	3	T=3.52±20% S=6.15±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Extraarticular Volar Distal Radius JZQ 03 head with 5 holes, right/left, size 2,4 mm, holes x length: 5x65 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с пятью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x65 мм	65	5	T=4.81±20% S=8.53±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x82 мм, 6x112 мм, 8x142 мм, 10x172 мм, 12x202 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 4x82 mm, 6x112 mm, 8x142 mm, 10x172 mm, 12x202 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	14 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 4x82 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x82 мм	82	4	T=20.66±20% S=36.04±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 6x112 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x112 мм	112	6	T=28.22±20% S=49.23±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 8x142 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 8x142 мм	142	8	T=35.78±20% S=62.42±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 10x172 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 10x172 мм	172	10	T=43.34±20% S=75.61±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia ZSQ 04, right/left, 2.7/3.5mm, holes x length: 12x202 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 12x202 мм	202	12	T=50.9±20% S=88.79±20%
--	--	-----	----	---------------------------

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 3-13 с шагом 1 /
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 3-13 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 3	91	3	T=15.76±20% S=27.5±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 4	103	4	T=17.84±20% S=31.13±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 5	115	5	T=19.92±20% S=34.75±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 6	127	6	T=22±20% S=38.4±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 7	139	7	T=24.08±20% S=42±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 8	151	8	T=26.16±20% S=45.64±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 9	163	9	T=28.24±20% S=49.26±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 10	175	10	T=30.32±20% S=52.89±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 11	187	11	T=32.4±20% S=56.51±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 12	199	12	T=34.48±20% S=60.14±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Humerus JZQ 03, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 13	211	13	T=36.55±20% S=63.77±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 3-9 с шагом 1 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 3-9 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,2 ± 0,25	11,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 3	61	3	T=6.94±20% S=12.11±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 4	73	4	T=8.31±20% S=14.5±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 5	85	5	T=9.67±20% S=16.88±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 6	97	6	T=11.04±20% S=19.26±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 7	109	7	T=12.41±20% S=21.64±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 8	121	8	T=13.77±20% S=24.03±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral Femur JZQ 03, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 9	133	9	T=15.14±20% S=26.41±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 3-12 increments 1, 14, 16, 18, 20

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm: outside/inner/others
6 ± 0,25	16 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3	105	3	T=45.36±20% S=79.13±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 4	123	4	T=53.14±20% S=92.69±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 5	141	5	T=60.91±20% S=106.26±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 6	159	6	T=68.69±20% S=119.8±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 7	177	7	T=76.47±20% S=133.4±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 8	195	8	T=84.24±20% S=146.9±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 9	213	9	T=92.02±20% S=160.5±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 11	248	11	T=107.1±20% S=186.9±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 12	266	12	T=114.9±20% S=200.5±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 14	301	14	T=130±20% S=226.8±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 16	336	16	T=145.1±20% S=253.2±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 18	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 18	370	18	T=159.8±20% S=278.8±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Curved, Condylar JZQ 03, right/left, holes: 20	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мыщелковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 20	405	20	T=175±20% S=305.2±20%
---	---	-----	----	--------------------------

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-9 с шагом 1, 11, 13, 15 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3-9 increments 1, 11, 13, 15

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
5 ± 0,25	16,3 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3	100	3	T=36.7±20% S=63.98±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 4	120	4	T=44.01±20% S=76.77±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 5	140	5	T=51.34±20% S=89.57±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 6	160	6	T=58.68±20% S=102.36±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 7	180	7	T=66.02±20% S=115.2±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 8	200	8	T=73.35±20% S=128±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 9	220	9	T=80.69±20% S=140.8±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 11	260	11	T=95.36±20% S=166.3±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 13	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 13	300	13	T=110.02±20% S=192±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal Lateral for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 15	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 15	340	15	T=124.7±20% S=217.5±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-8 с шагом 1, 10, 12, 14, 16 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3-8 increments 1, 10, 12, 14, 16

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,8 ± 0,25	14 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3	64	3	T=15.32±20% S=26.72±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 4	82	4	T=19.63±20% S=34.24±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 5	100	5	T=23.94±20% S=41.76±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 6	118	6	T=28.24±20% S=49.27±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 7	136	7	T=32.56±20% S=56.79±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 8	154	8	T=36.87±20% S=64.31±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 10	190	10	T=45.49±20% S=79.34±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 12	226	12	T=54.1±20% S=94.38±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 14	262	14	T=62.72±20% S=109.4±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Proximal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 16	298	16	T=71.34±20% S=124.45±20%


Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-8 с шагом 1, 10, 12, 14, 16/ Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3-8 increments 1, 10, 12, 14, 16

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
4 ± 0,25	14 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3	54	3	T=13.61±20% S=23.74±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 4	67	4	T=16.88±20% S=29.45±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 5	80	5	T=20.16±20% S=35.17±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 6	93	6	T=23.4±20% S=40.88±20%

Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 7	106	7	T=26.71±20% S=46.59±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 8	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 8	119	8	T=29.98±20% S=52.31±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 10	145	10	T=36.54±20% S=63.74±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 12	171	12	T=43.1±20% S=75.17±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 14	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 14	197	14	T=49.64±20% S=86.6±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Anterolateral Distal for Tibia JZQ 03, right/left, holes: 16	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 16	223	16	T=56.2±20% S=98.03±20%


Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 7, 9, 10, 11, 12 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 7, 9, 10, 11, 12

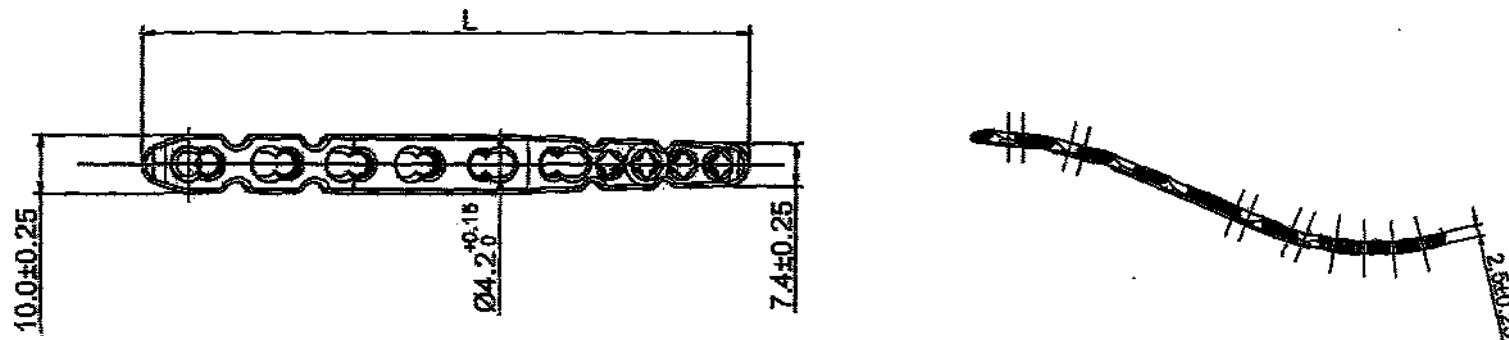

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate head width with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,5 ± 0,25	10 ± 0,25	7,4 ± 0,25	4,2 ₀ ^{+0,15}	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 7	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 7	77	7	T=8.66±20% S=15.11±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 9	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 9	89	9	T=10.01±20% S=17.47±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 10	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 10	101	10	T=11.36±20% S=19.82±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 11	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 11	113	11	T=12.71±20% S=22.17±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) lateral for Anterior Clavicle, JSQ 01 size 2.7 / 3.5 mm, holes: 12	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 12	124	12	T=13.95±20% S=24.33±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 2, 3, 4, 5 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius JZQ 04, right/left, 2.4mm, head with 6 Holes, holes: 2, 3, 4, 5

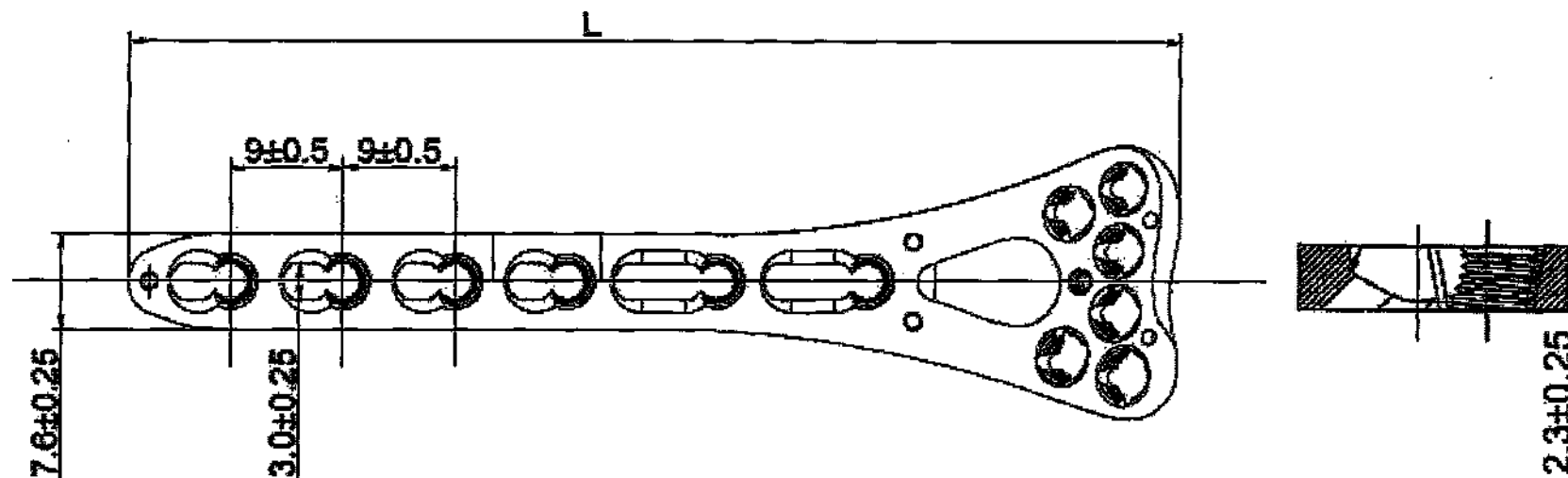

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,3 ± 0,25	7,6 ± 0,25	3 ± 0,25	9 ± 0,5	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± l, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, g ± g Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius JZQ 04, right/left, 2.4mm, head with 6 Holes, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 2	44	2	T=3.62±20% S=6.31±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius JZQ 04, right/left, 2.4mm, head with 6 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 3	55	3	T=4.33±20% S=7.55±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius JZQ 04, right/left, 2.4mm, head with 6 Holes, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 4	67	4	T=5.272±20% S=9.19±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius JZQ 04, right/left, 2.4mm, head with 6 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 5	76	5	T=5.98±20% S=10.43±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 2, 3, 4, 5 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius ZEQ 01, right/left, 2.4mm, head with 7 Holes, holes: 2, 3, 4, 5

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness μm, outside/inner/others
2,3 ± 0,25	7,6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius ZEQ 01, right/left, 2.4mm, head with 7 Holes, holes: 2	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 2	45	2	T=3.51±20% S=6.16±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius ZEQ 01, right/left, 2.4mm, head with 7 Holes, holes: 3	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 3	54	3	T=4.21±20% S=7.39±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius ZEQ 01, right/left, 2.4mm, head with 7 Holes, holes: 4	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 4	66	4	T=5.15±20% S=9.04±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Two-Column Volar for Distal Radius ZEQ 01, right/left, 2.4mm, head with 7 Holes, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 5	75	5	T=5.85±20% S=10.27±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя дистальная для лучевой кости, прямая JSQ 01, размер 2,4 мм, отверстия: 5, 6 / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal Distal for Radius, straight JSQ 01, size 2.4 mm, holes: 5, 6

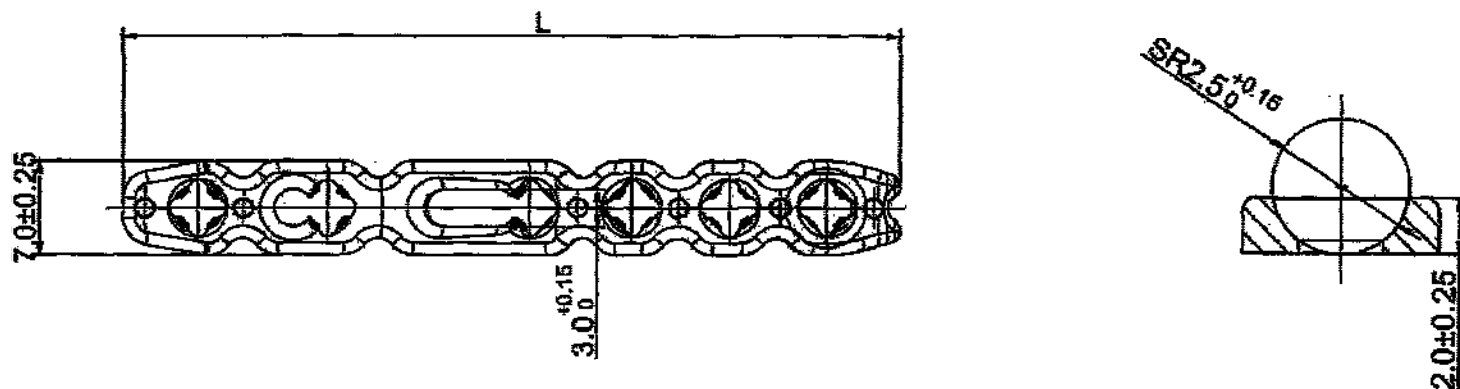

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	7 ± 0,25	3 ₀ ^{+0.15}	2,5 ₀ ^{+0.15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle Dorsal Distal for Radius, straight JSQ 01, size 2.4 mm, holes: 5	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом задняя дистальная для лучевой кости, прямая JSQ 01, размер 2,4 мм, отверстия: 5	46	5	T=2.9±20% S=5.06±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle Dorsal Distal for Radius, straight JSQ 01, size 2.4 mm, holes: 6	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом задняя дистальная для лучевой кости, прямая JSQ 01, размер 2,4 мм, отверстия: 6	57	6	T=3.59±20% S=6.26±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x109 мм, 4x125 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 3x109 mm, 4x125 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 2	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Е × L, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 3x109 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x109 мм	109	3	T=52.97±20% S=86.54±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral for Tibiotalar JSQ 06, holes x length: 4x125 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 4x125 мм	125	4	T=60.75±20% S=99.25±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой, таранной и пяточной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x139 мм, 4x154 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral for Tibiototalcalcaneal JSQ 06, holes x length: 3x139 mm, 4x154 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm: outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 2	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral for Tibiototalcalcaneal JSQ 06, holes x length: 3x139 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой, таранной и пяточной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x139 мм	139	3	T=67.55±20% S=110.36±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral for Tibiototalcalcaneal JSQ 06, holes x length: 4x154 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой, таранной и пяточной костей JSQ 06, отверстия x длина: 4x154 мм	154	4	T=74.84±20% S=122.27±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм, 2x82 мм, 5x121 мм, 7x147 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 1x69 mm, 2x82 mm, 5x121 mm, 7x147 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 1x69 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм	69	1	T=11.1±20% S=19.5±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 2x82 mm,	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x82 мм	82	2	T=13.2±20% S=23.1±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 5x121 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 5x121 мм	121	5	T=19.4±20% S=34.2±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2,7/3,5 mm, holes x length: 7x147 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 7x147 мм	147	7	T=23.6±20% S=41.5±20%

Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x79 мм, 4x92 мм, 5x105 мм, 6x118 мм, 7x131 мм / Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2,7 mm, holes x length: 3x79 mm, 4x92 mm, 5x105 mm, 6x118 mm, 7x131 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,8 ± 0,25	8,7 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2,7 mm, holes x length: 3x79 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x79 мм	79	3	T=8.65±20% S=15.1±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2,7 mm, holes x length: 4x92 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x92 мм	92	4	T=10.08±20% S=17.59±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2,7 mm, holes x length: 5x105 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 5x105 мм	105	5	T=11.51±20% S=20.07±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2,7 mm, holes x length: 6x118 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 6x118 мм,	118	6	T=12.93±20% S=22.56±20%
Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Lateral Distal for Fibula ZSQ 04, right/left, size 2,7 mm, holes x length: 7x131 mm	Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 7x131 мм	131	7	T=14.36±20% S=25.05±20%

Пластина с 2 отверстиями ZSQ 03, размер 2,7 мм, длина 20 мм / Plate with 2 Holes ZSQ 03, size 2.7 mm, length 20 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины (L) с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length (L) with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	20 ± 0,25	6 ± 0,25	2	T=0.8±20% S=1.47±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 5-14 с шагом 1/ Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 5-14 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2 мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 5	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 5	61	5	T=6±20% S=10.53±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 6	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 6	73	6	T=7.22±20% S=12.6±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 7	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 7	85	7	T=8.42±20% S=14.68±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 8	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 8	97	8	T=9.6±20% S=16.75±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 9	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 9	109	9	T=10.78±20% S=18.82±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 10	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 10	121	10	T=11.98±20% S=20.89±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 11	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 11	133	11	T=13.17±20% S=22.97±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 12	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 12	145	12	T=14.35±20% S=25.04±20%
Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 13	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 13	157	13	T=15.54±20% S=27.11±20%

Semi-Tubular ZSQ 09 holes: 14	Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 14	169	14	T=16.73±20% S=29.18±20%
-------------------------------	--	-----	----	----------------------------

Пластина переходная / Plate adaption

Пластина переходная ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 6x41 мм, 12x82 мм / Plate adaption ZSQ 03, size 2.7 mm, holes x length: 6x41 mm, 12x82 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Е ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate adaption ZSQ 03, size 2.7 mm, holes x length: 6x41 mm	Пластина переходная ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 6x41 мм	41	6	T=1.62±20% S=2.95±20%
Plate adaption ZSQ 03, size 2.7 mm, holes x length: 12x82 mm	Пластина переходная ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 12x82 мм	82	12	T=2.9±20% S=5.2±20%

Пластина переходная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x27 мм, 12x57 мм / Plate adaption JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length: 6x27 mm, 12x57 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	l ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate adaption JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length : 6x41 mm	Пластина переходная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x41 мм	27	6	T=0.4±20% S=0.69±20%
Plate adaption JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length : 12x82 mm	Пластина переходная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 12x82 мм	57	12	T=0.8±20% S=1.4±20%

Пластина переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x39 мм, 12x78 мм / Plate adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 6x39 mm, 12x78 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	Е ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 6x39 mm	Пластина переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x39 мм	39	6	T=0.76±20% S=1.33±20%
Plate adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 12x78 mm	Пластина переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстия x длина: 12x78 мм	78	12	T=1.52±20% S=2.6±20%

Пластина переходная JZQ 03 размер 2,4 мм, отверстия x длина: 6x41 мм, 12x82 мм / Plate adaption JZQ 03, size 2.4 mm, holes x length: 6x41 mm, 12x82 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm: outside/inner/others
1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, g ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate adaption JZQ 03, size 2.4 mm, holes x length: 6x41 mm	Пластина переходная JZQ 03 размер 2,4 мм, отверстия x длина: 6x41 мм	41	6	T=1.35±20% S=2.35±20%
Plate adaption JZQ 03, size 2.4 mm, holes x length: 12x82 mm	Пластина переходная JZQ 03 размер 2,4 мм, отверстия x длина: 12x82 мм	82	12	T=2.6±20% S=4.6±20%

Пластина переходная ZEQ 03 размер 1,5 мм, отверстия: 6, 8, 10, 20 / Plate adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 6, 8, 10, 20

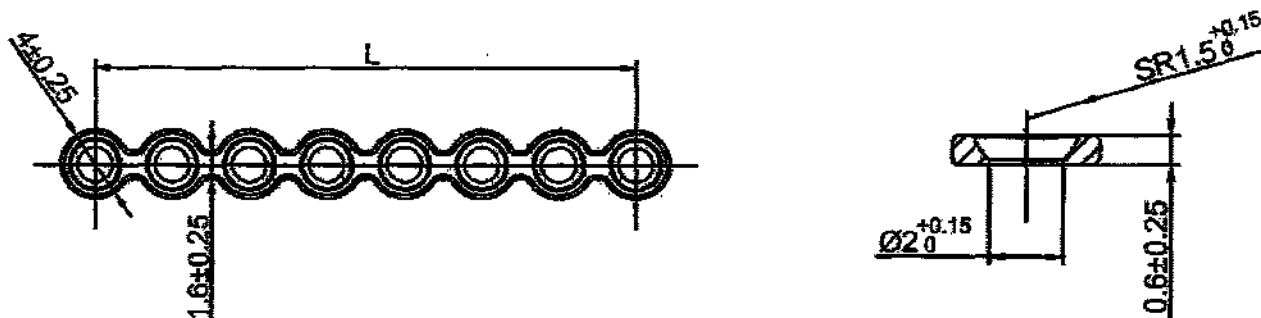

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6 ± 0,25	1,6 ± 0,25	2 ₀ ^{+0.15}	4 ± 0,25	1,5 ₀ ^{+0.15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,25, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 6	Пластина переходная ZEQ 03 размер 1,5 мм, отверстия: 6	26	6	T=0.28±20% S=0.49±20%
Plate adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 8	Пластина переходная ZEQ 03 размер 1,5 мм, отверстия: 8	35	8	T=0.38±20% S=0.66±20%
Plate adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 10	Пластина переходная ZEQ 03 размер 1,5 мм, отверстия: 10	44	10	T=0.48±20% S=0.83±20%
Plate adaption ZEQ 03, size 1.5 mm, holes: 20	Пластина переходная ZEQ 03 размер 1,5 мм, отверстия: 20	88	20	T=0.95±20% S=1.66±20%

Пластина Т-образная / T-Plate

Пластина Т-образная JZQ 01, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x34 мм, 4x42 мм / T-Plate JZQ 01, head with two holes, size 2.7 mm. holes x length: 3x34 mm, 4x42 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate JZQ 01, head with two holes, size 2.7 mm. holes x length: 3x34 mm	Пластина Т-образная JZQ 01, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x34 мм	34	3	T=1.46±20% S=2.53±20%
T-Plate JZQ 01, head with two holes, size 2.7 mm. holes x length: 4x42 mm	Пластина Т-образная JZQ 01, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x42 мм	42	4	T=2.04±20% S=3.56±20%

Пластина Т-образная JZQ 02, головка с тремя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм, 4x23 мм / T-Plate JZQ 02, head with three holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm, 4x23 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate JZQ 02, head with three holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm	Пластина Т-образная JZQ 02, головка с тремя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм	41	8	T=1,4±20% S=1.12±20%
T-Plate JZQ 02, head with three holes, size 1.5 mm, holes x length: 4x23 mm	Пластина Т-образная JZQ 02, головка с тремя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x23 мм	23	4	T=1±20% S=1.8±20%

Пластина Т-образная JZQ 02, головка с четырьмя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм, 4x23 мм / T-Plate JZQ 02, head with four holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm, 4x23 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate JZQ 02, head with four holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm	Пластина Т-образная JZQ 02, головка с четырьмя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм	41	8	T=1,4±20% S=1.12±20%
T-Plate JZQ 02, head with four holes, size 1.5 mm, holes x length: 4x23 mm	Пластина Т-образная JZQ 02, головка с четырьмя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x23 мм	23	4	T=1±20% S=1.8±20%

Пластина Т-образная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм, 4x34 мм / T-Plate JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm, 4x34 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm	Пластина Т-образная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм	60	8	T=1.57±20% S=2.66±20%
T-Plate JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34 mm	Пластина Т-образная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34 мм	34	4	T=0.8±20% S=1.4±20%

Пластина Т-образная JZQ 03, головка с тремя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм, 4x34 мм / T-Plate JZQ 03, head with three holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm, 4x34 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Л ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate JZQ 03, head with three holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm	Пластина Т-образная JZQ 03, головка с тремя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм	60	8	T=1.58±20% S=2.65±20%
T-Plate JZQ 03, head with three holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34 mm	Пластина Т-образная JZQ 03, головка с тремя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34 мм	34	4	T=0.8±20% S=1.4±20%

Пластина Т-образная JZQ 03, головка с четырьмя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм, 4x34 мм / T-Plate JZQ 03, head with four holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm, 4x34 mm


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate JZQ 03, head with four holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm	Пластина Т-образная JZQ 03, головка с четырьмя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм	60	8	T=1.60±20% S=2.7±20%
T-Plate JZQ 03, head with four holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34 mm	Пластина Т-образная JZQ 03, головка с четырьмя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34 мм	34	4	T=0.8±20% S=1.4±20%

Пластина Т-образная JZQ 04, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 4x35 мм / T-Plate JZQ 04, head with two holes, size 2.4 mm, holes x length: 4x35 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины (L) с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length (L) with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	35 ± 1	6 ± 0,25	4	T=1.16±20% S=2.03±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости JZQ 03, головка с тремя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм / T-Plate Dorsal Distal Radius Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) JZQ 03, head with 3 holes, size 2.4 mm, holes x length: 5x51 mm

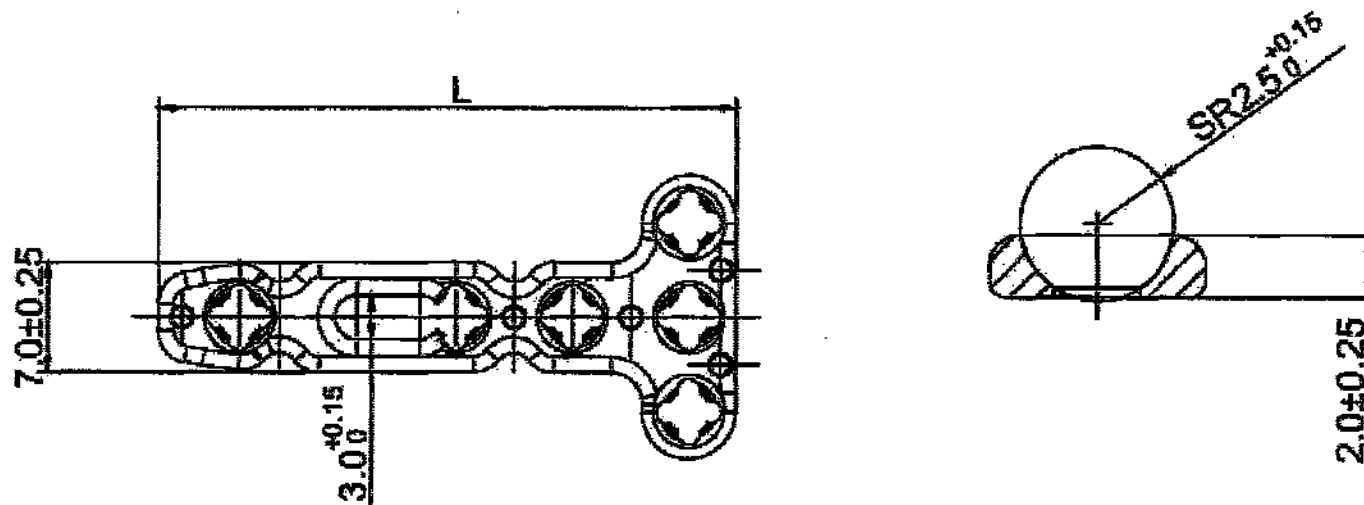


Длина пластины (L) с погрешностями мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса погрешностями г ± г	Шероховатость мм внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance mm ± mm	Plate thickness with tolerance mm ± mm	Plate width with tolerance mm ± mm	Hole width with tolerance mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances g ± g	Roughness μm outside/inner/others
51±1	2 ± 0,25	7 ± 0,25	3 ^{+0,15} ₀	2,5 ^{+0,15} ₀	5	T=3.21±20% S=5.6±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм, 6x90 мм / T-Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral Distal for Tibial ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 4x72 mm, 6x90 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral Distal for Tibial ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 4x72 mm	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм	72	4	T=10.62±20% S=18.65±20%
T-Plate Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral Distal for Tibial ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 6x90 mm	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 6x90 мм	90	6	T=13.36±20% S=23.31±20%


Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4, 5, 6 / T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 09, right/left, size 3.5 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 3, 4, 5, 6

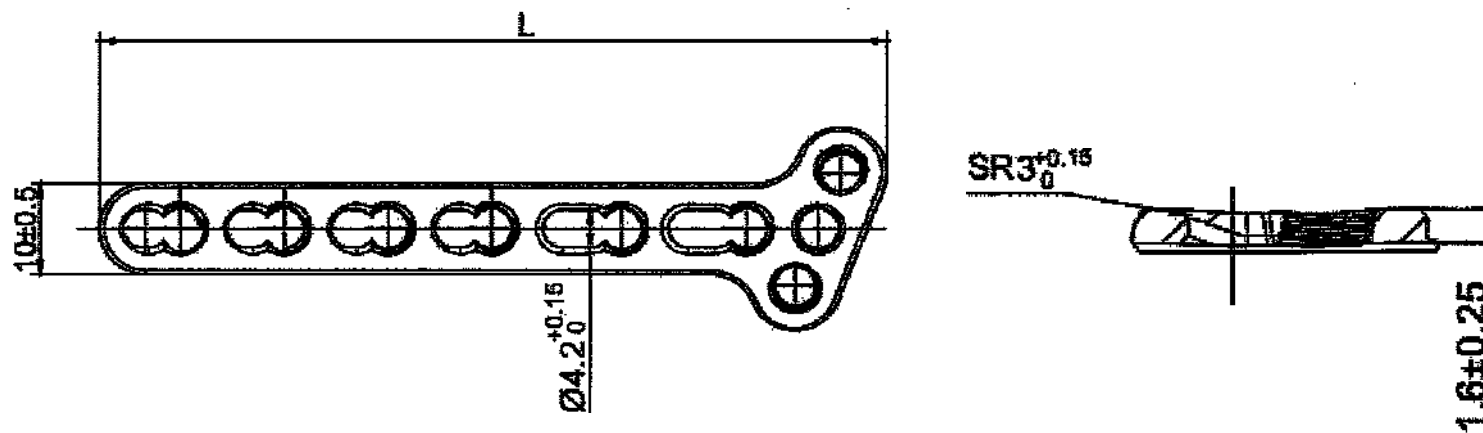

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
1,6 ± 0,25	10 ± 0,5	4,2 ₀ ^{+0,15}	3 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± 1 / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 09, right/left, size 3.5 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3	52	3	T=3.28±20% S=5.71±20%
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 09, right/left, size 3.5 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 4	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 4	63	4	T=3.97±20% S=6.92±20%
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 09, right/left, size 3.5 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 5	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 5	74	5	T=4.66±20% S=8.13±20%
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 09, right/left, size 3.5 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 6	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 6	85	6	T=5.36±20% S=9.34±20%


Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4 / T-Plate Dorsal Distal Locking Compression (LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 3, 4

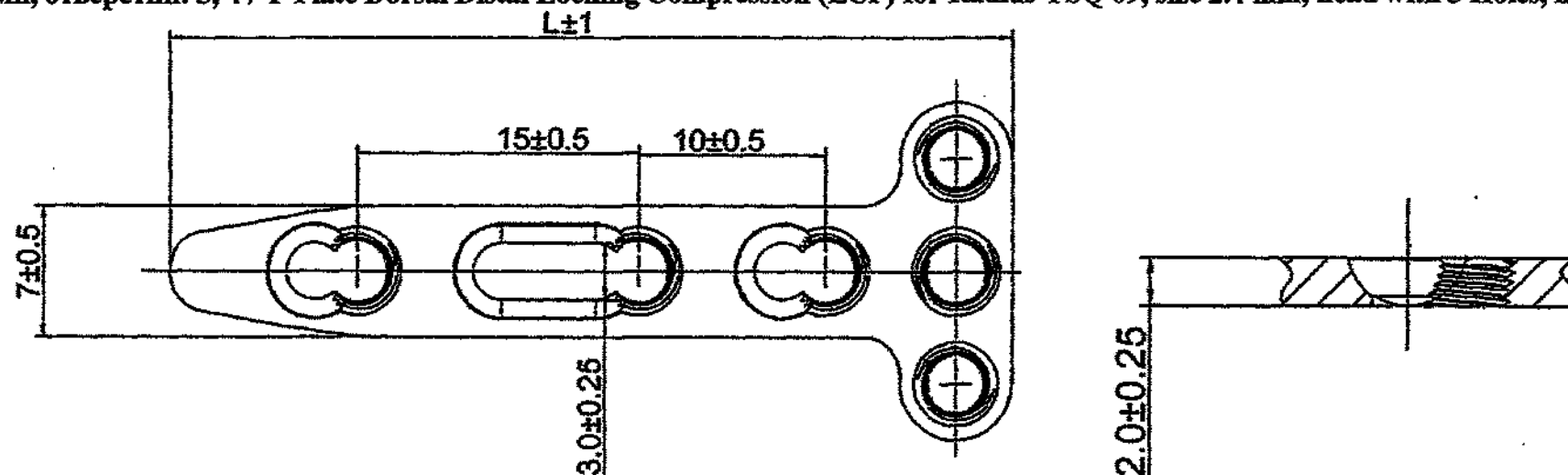

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,0 ± 0,25	7 ± 0,5	3±0,25	10±0,5 15±0,5	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Dorsal Distal Locking Compression (LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3	49	3	T=2.52±20% S=4.4±20%
T-Plate Dorsal Distal Locking Compression (LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 4	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 4	59	4	T=3.09±20% S=5.39±20%


Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4, 5, 6 / T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 01, size 3.5 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 3, 4, 5, 6

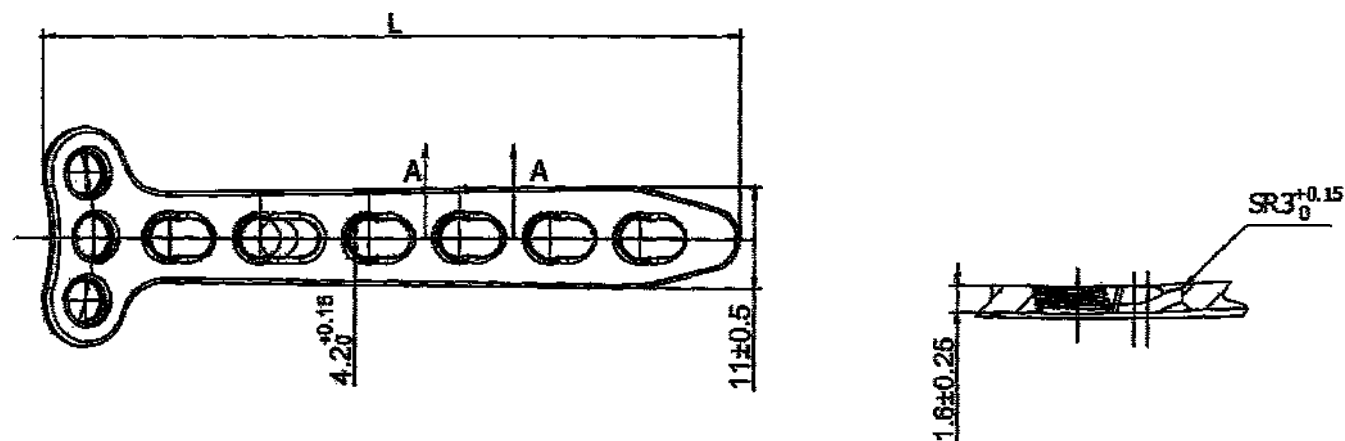

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстий с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
1,6 ± 0,25	11 ± 0,5	4,2 ₀ ^{+0,15}	3 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 01, size 3.5 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3	50	3	T=3.15±20% S=5.5±20%
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 01, size 3.5 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 4	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 4	57	4	T=3.59±20% S=6.26±20%
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 01, size 3.5 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 5	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 5	67	5	T=4.22±20% S=7.36±20%
T-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 01, size 3.5 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 6	Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 6	77	6	T=4.85±20% S=8.46±20%

Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4 / T-Plate Dorsal Distal Lateral Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 3, 4

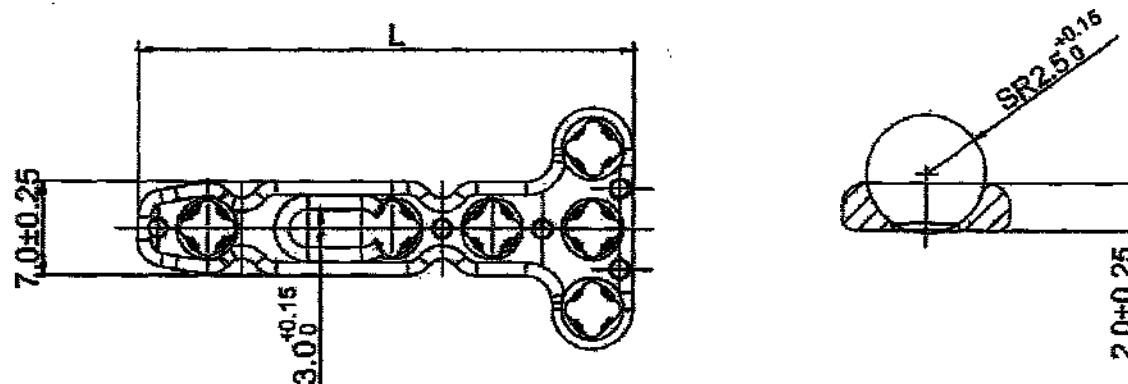

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шаржи отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	7 ± 0,25	3 ₀ ^{+0,15}	2,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Dorsal Distal Lateral Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3	37	3	T=2.33±20% S=4.06±20%
T-Plate Dorsal Distal Lateral Locking Compression with Variable Angle (VA-LCP) for Radius YSQ 09, size 2.4 mm, head with 3 Holes, holes: 4	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 4	44	4	T=2.77±20% S=4.83±20%

Пластина Т-образная дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 3, 5 / T-Plate Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 3, 5

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, mm (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 3	Пластина Т-образная дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 3	64	3	T=10.37±20% S=18.09±20%
T-Plate Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина Т-образная дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 5	90	5	T=14.58±20% S=25.43±20%


Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 8, 12, 16 / T-Plate Posterior Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 8, 12, 16

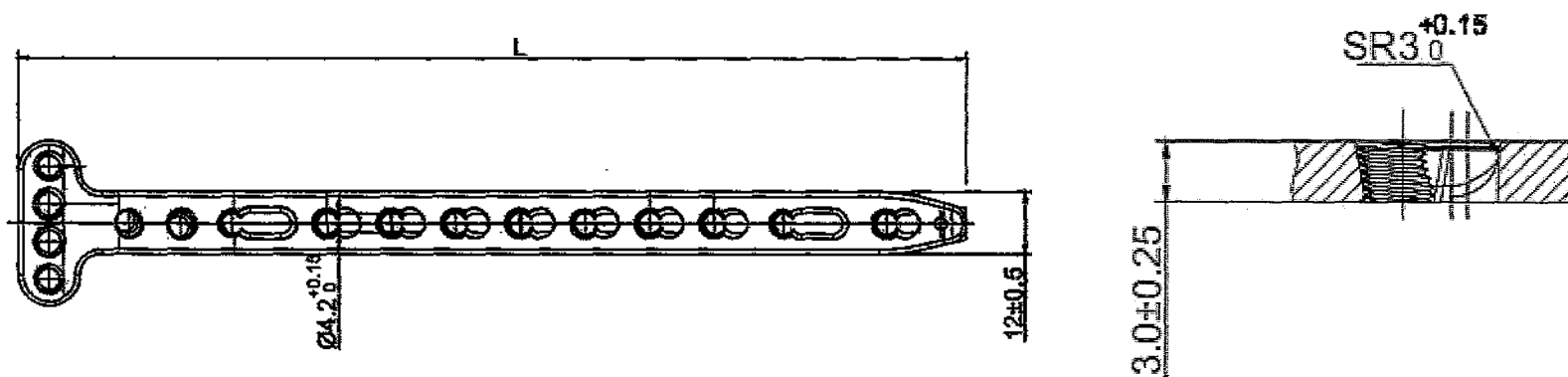

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	12 ± 0,5	4,2 ^{+0,15} ₀	3 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± l, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Posterior Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 8	132	8	T=21.38±20% S=37.3±20%
T-Plate Posterior Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 12	184	12	T=29.81±20% S=52±20%
T-Plate Posterior Distal Locking Compression (LCP) Tibia YSQ 09, size 3.5 mm, holes: 16	Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 16	236	16	T=38.23±20% S=66.69±20%

Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с двумя/тремя/четырьмя отверстиями / T-Plate Locking YSQ 09, size 1.5 mm, holes: 8, head with two/three/four holes

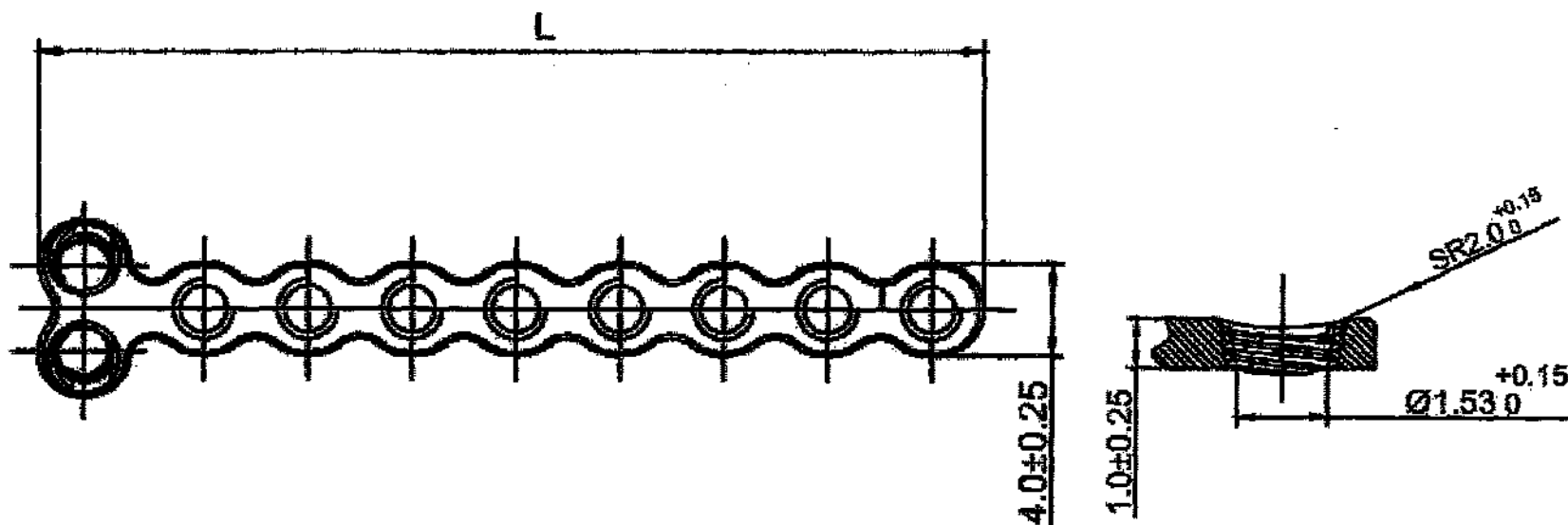


Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с двумя отверстиями

Длина пластины (L) с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, mm, outside/inner/others
40,9±1	1 ± 0,25	4 ± 0,25	1,53 ₀ ^{+0,15}	2 ₀ ^{+0,15}	8	T=0.78±20% S=1.36±20%	0,4 0,8 1,6

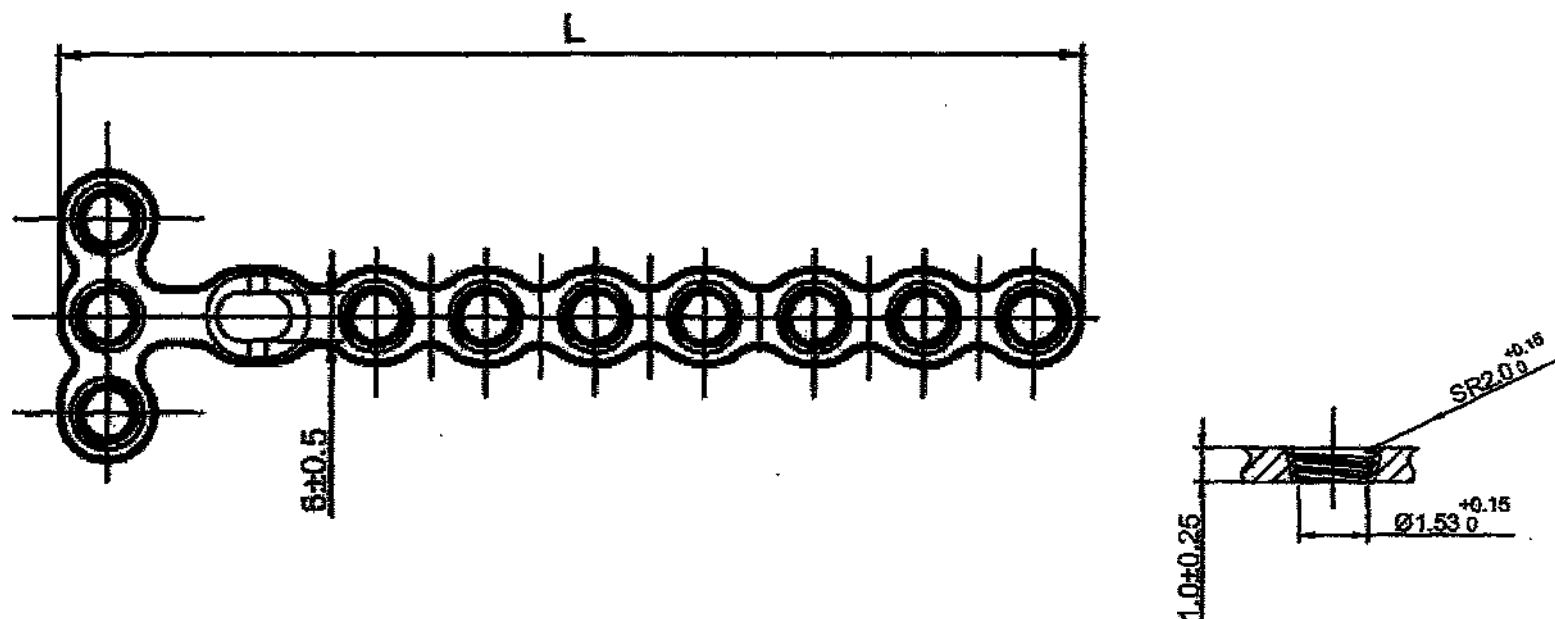

Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с тремя отверстиями

Длина пластины (L) с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others
42±1	1 ± 0,25	6 ± 0,5	1,53 ^{+0,15} ₀	2 ^{+0,15} ₀	8	T=0.82±20% S=1.44±20%	0,4 0,8 1,6

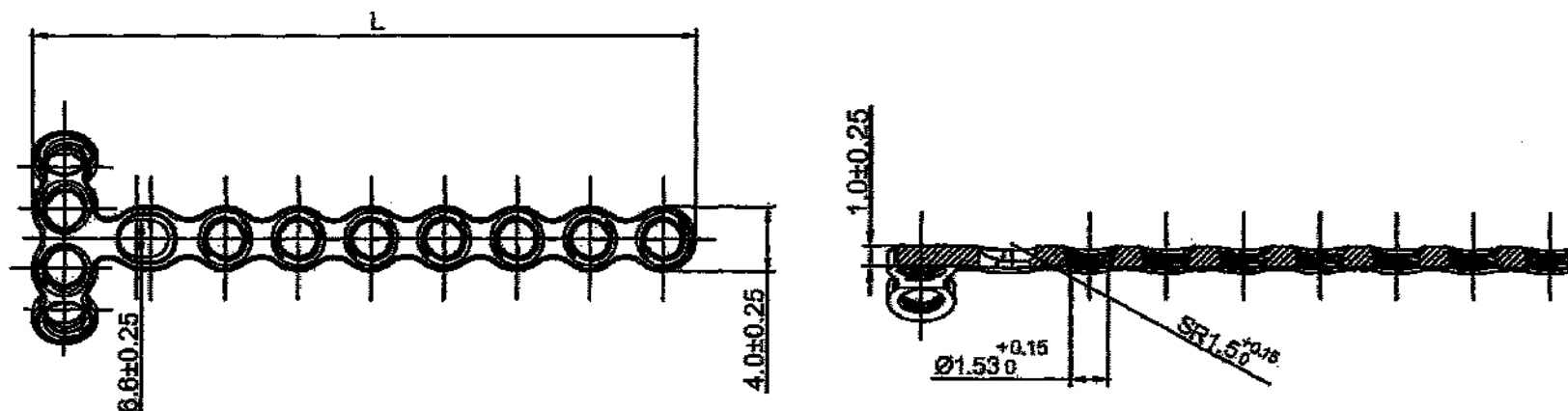

Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с четырьмя отверстиями

Длина пластины (L) с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others
40,9±1	1 ± 0,25	4 ± 0,5	6,6 ± 0,25	1,53 ^{+0,15} ₀	1,5 ^{+0,15} ₀	8	T=0.86±20% S=1.52±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 6, 8, головка с тремя отверстиями / T-Plate Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes:6, 8, head with three holes

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes:6, head with three holes	Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 6, головка с тремя отверстиями	32	6	T=1.3±20% S=2.26±20%
Plate Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes:8, head with three holes	Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 8, головка с тремя отверстиями	41	8	T=1.66±20% S=2.89±20%

Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 6, 8, головка с четырьмя отверстиями / T-Plate Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes:6, 8, head with four holes

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± t, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes:6, head with four holes	Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 6, головка с четырьмя отверстиями	32	6	T=1.38±20% S=2.42±20%
T-Plate Locking YSQ 09, size 1.3 mm, holes: 8, head with four holes	Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 8, головка с четырьмя отверстиями	41	8	T=1.74±20% S=3.05±20%

Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,0 мм/2,4 мм, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий 7 /
T-Plate Locking Compression (LCP), YSQ 09 size 2.0 mm/2.4 mm, head with two/three holes, holes 7

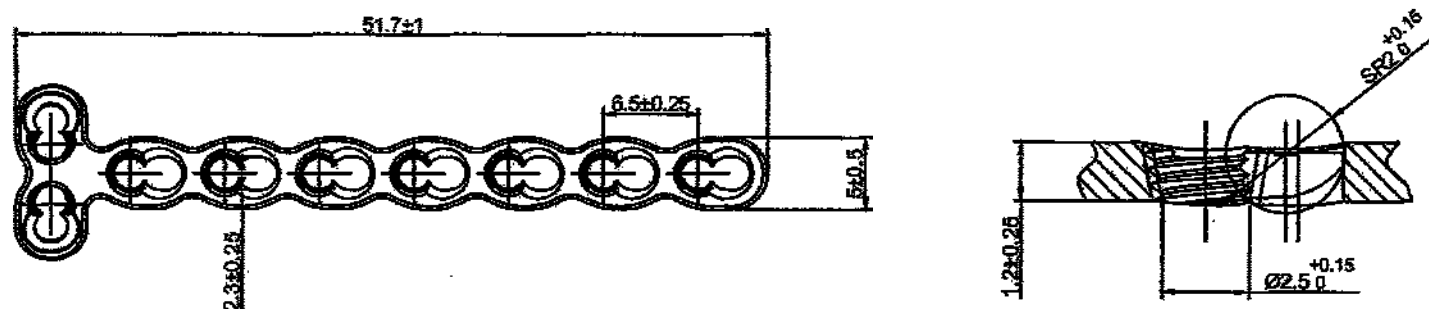


Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7

Длина пластины с погрешностями л, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями н, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями п, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями л, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями л, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями л, мм ± мм	Радиус с сфер л	Количество отверстий	Масса с погрешностями л, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
51,7±1	1,2 ± 0,25	5 ± 0,5	6,5 ± 0,25	2,3 ± 0,25	2,5 ₀ ^{+0.15}	2 ₀ ^{+0.15}	7	T=1.43±20% S=2.5±20%	0,4 0,8 1,6

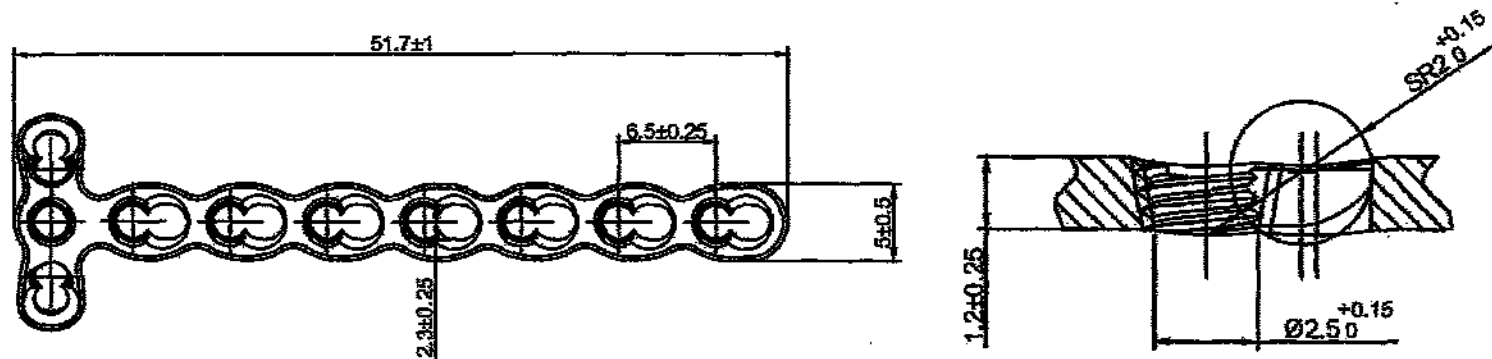


Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,0 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий 7

Длина пластины с погрешностями н, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями н, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями н, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями н, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями н, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями н, мм ± мм	Радиус сфер н	Количество отверстий	Масса с погрешностями н, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
51,7±1	1,2 ± 0,25	5 ± 0,5	6,5 ± 0,25	2,3 ± 0,25	2,5 ₀ ^{+0.15}	2 ₀ ^{+0.15}	7	T=1.43±20% S=2.5±20%	0,4 0,8 1,6

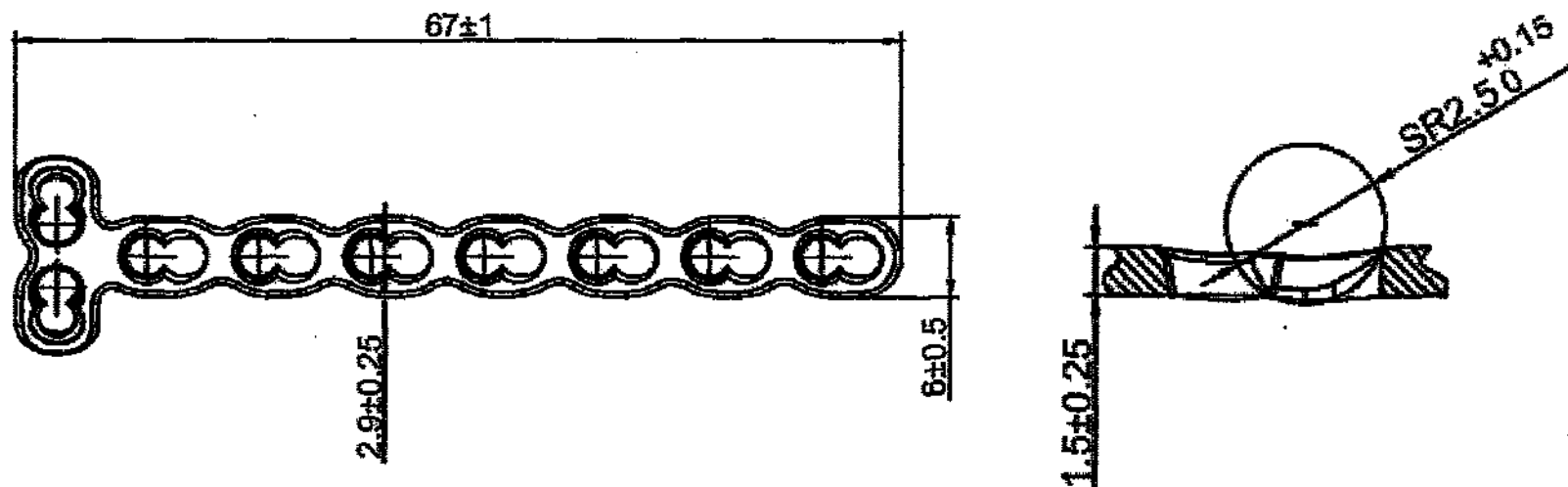

Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others μm
67±1	1,5 ± 0,25	6 ± 0,5	2,9 ± 0,25	2,5 ₀ ^{+0,15}	7	T=2.73±20% S=4.77±20%	0,4 0,8 1,6

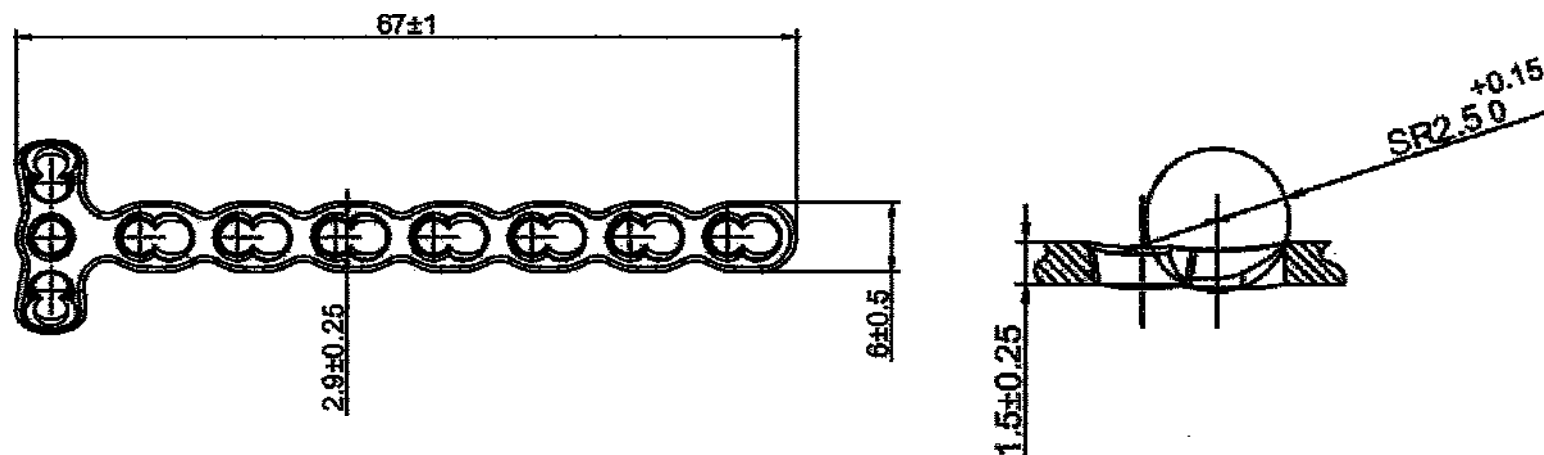

Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий 7


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
67±1	1,5 ± 0,25	6 ± 0,5	2,9 ± 0,25	2,5 ₀ ^{+0,15}	7	T=2.73±20% S=4.77±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина Т-образная YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстий 7 / T-Plate YSQ 09 size 1.5 mm holes 7

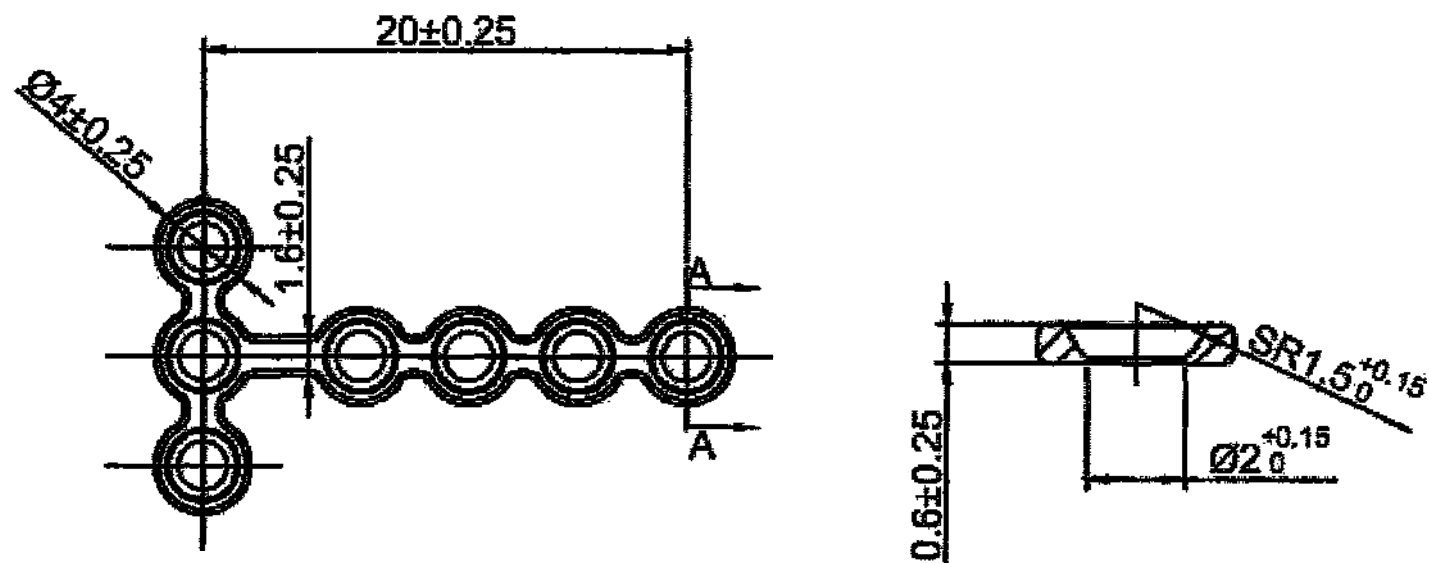

Длина пластины с погрешностями и, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями и, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями и, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями и, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями и, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями и, мм ± мм	Радиус сфер и	Количество отверстий	Масса с погрешностями и, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
20±0,25	4±0,25	0,6 ± 0,25	1,6 ± 0,25	2,9 ± 0,25	2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	7	T=0.41±20% S=0.71±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 2,7 мм, отверстий 3, 4, 5 / T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 2.7 mm holes 3, 4, 5

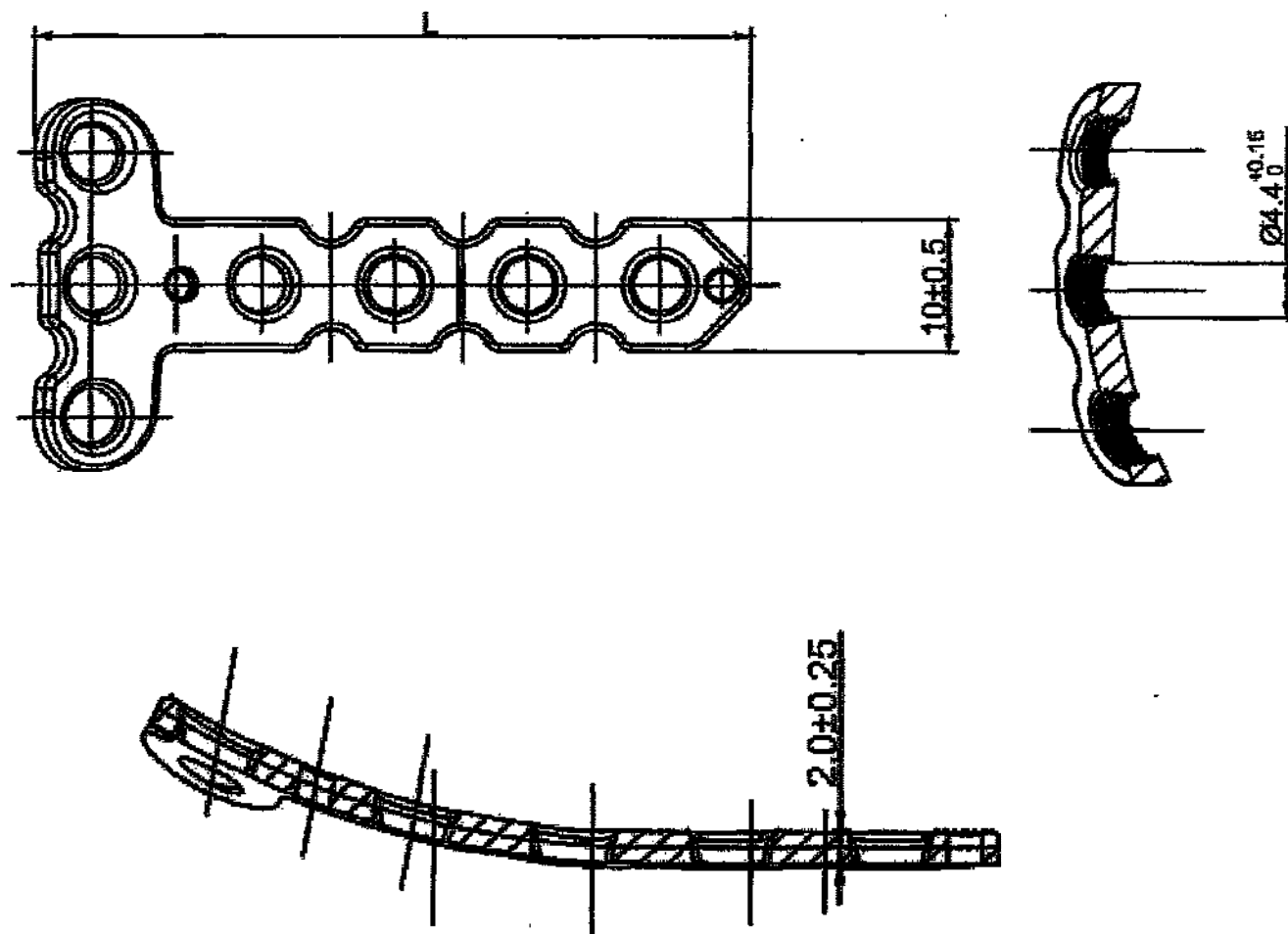

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия головки с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Head hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	10 ± 0,5	4,4 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L ₁ , мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 2.7 mm holes 3	Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 2,7 мм, отверстий 3	44	3	T=3.96±20% S=6.91±20%
T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 2.7 mm holes 4	Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 2,7 мм, отверстий 4	54	4	T=4.86±20% S=8.48±20%
T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 2.7 mm holes 5	Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 2,7 мм, отверстий 5	64	5	T=5.76±20% S=10.05±20%

Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 3,5 мм, отверстий 3, 5, 7 / T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 3.5 mm holes 3, 5, 7

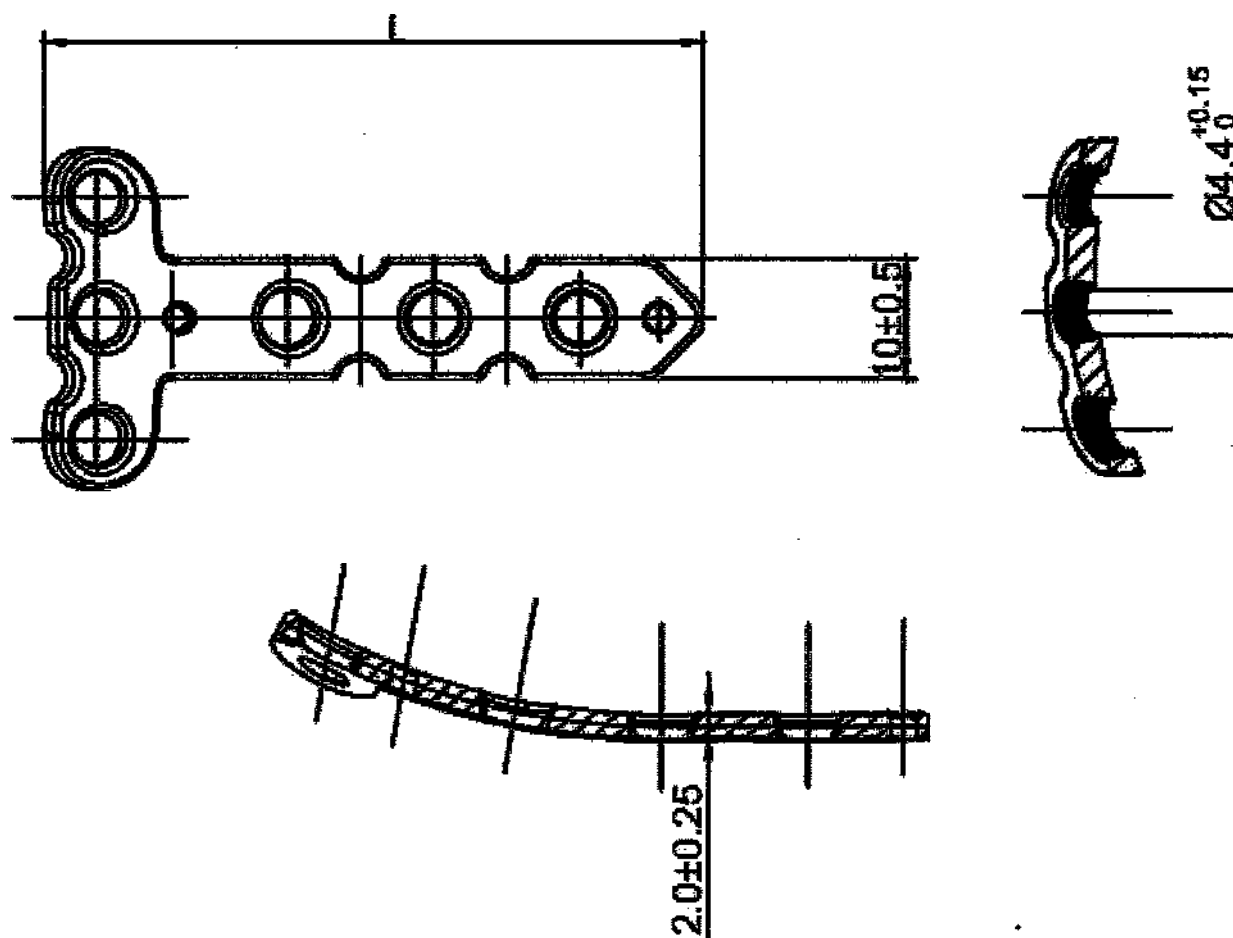

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия головки с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Head hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	10 ± 0,5	4,4 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 3.5 mm holes 3	Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 3,5 мм, отверстий 3	54	3	T=4.86±20% S=8.48±20%
T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 3.5 mm holes 5	Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 3,5 мм, отверстий 5	78	5	T=7.02±20% S=12.25±20%
T-Plate Pediatric Locking YSQ 19 size 3.5 mm holes 7	Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 3,5 мм, отверстий 7	102	7	T=9.18±20% S=16.01±20%

Пластина Т-образная JZQ 04, наклонная, 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстий x длина: 3x29 мм / T-Plate JZQ 04, Oblique, size 2.4 mm, two holes head, right/left, holes x length: 3x29 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
29±2	1,5 ± 0,25	3	T=0.96±20% S=1.68±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина L-образная / L-Plate

Пластина L-образная JZQ 01, правая/левая, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстий x длина: 3x34 мм / L-Plate JZQ 01, right/left, head with two holes, size 2.7 mm, holes x length: 3x34 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
34±2	1.8 ± 0,25	6±0,25	3	T=1.4±20% S=2.59±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина L-образная наклонная, JZQ 01, левая/правая, головка с двумя отверстиям, размер 2,7 мм, отверстий x длина: 3x36 мм / L-Plate Oblique JZQ 01, right/left, head with two holes, size 2.7 mm, holes x length: 3x36 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
36±2	1.8 ± 0,25	6±0,25	3	T=1.49±20% S=2.75±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина L-образная JZQ 02, правая/левая, головка с двумя отверстиям, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм / L-Plate JZQ 02, right/left, head with two holes, size 1.5 mm, holes x length: 8x41 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
41±2	1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	8	T=0.7±20% S=1.09±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина L-образная JZQ 03, правая/левая, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстий x длина: 8x60 мм / L-Plate JZQ 03, right/left, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 8x60 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
60±2	1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	8	T=1.35±20% S=2.35±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина L-образная наклонная, JZQ 04, левая/правая, головка с двумя отверстиям, размер 2,4 мм, отверстий x длина: 4x37,5 мм / L-Plate Oblique JZQ 04, right/left, head with two holes, size 2.4 mm, holes x length: 4x37,5 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm; outside/inner/others
37,5±2	1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	4	T=1.24±20% S=2.175±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 1,5 мм, отверстий: 5, 7, 10 / L-Plate YSQ 12, right/left, size 1.5 mm, holes: 5, 7, 10

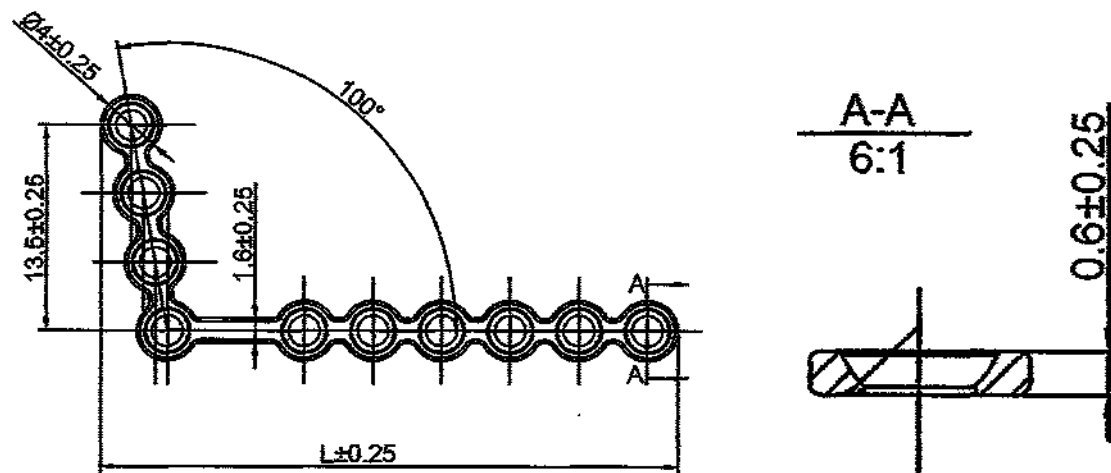

Расстояние между крайним и головным отверстием с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Угол, °	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between the end and head hole with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Angle, °	Roughness, μm, outside/inner/others
13,5±0,25	4±0,25	0,6 ± 0,25	1,6 ± 0,25	100	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± 0,25 мм (mm)	Отверстий (Holes) шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate YSQ 12, right/left, size 1.5 mm, holes: 5	Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 1,5 мм, отверстий: 5	22	5	T=0.3±20% S=0.52±20%
L-Plate YSQ 12, right/left, size 1.5 mm, holes: 7	Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 1,5 мм, отверстий: 7	27,5	7	T=0.39±20% S=0.69±20%
L-Plate YSQ 12, right/left, size 1.5 mm, holes: 10	Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 1,5 мм, отверстий: 10	37,5	10	T=0.54±20% S=0.94±20%

Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 2,0 мм, отверстий: 5 / L-Plate YSQ 12, right/left, size 2.0 mm, holes: 5

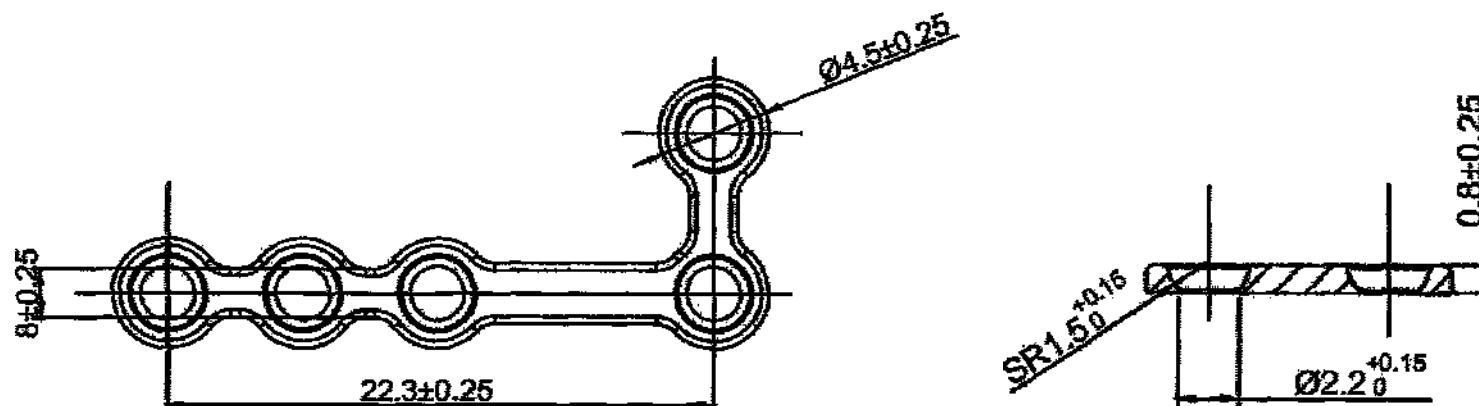

Расстояние между крайним и головным отверстием с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between the end and head hole with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
22,3±0,25	4,5±0,25	0,8 ± 0,25	8 ± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	7	T=0.35±20% S=0.61±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-9 с шагом 1 / L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 4-9 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	16 ± 0,25	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	84	4	T=12.1±20% S=21.1±20%
L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 5	100	5	T=14.4±20% S=25.12±20%
L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6	116	6	T=16.73±20% S=29.14±20%
L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 7	132	7	T=19±20% S=33.16±20%
L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 8	Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 8	148	8	T=21.31±20% S=37.17±20%
L-Plate Buttress JZQ 05 right/left, size 4.5 mm, holes: 9	Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 9	164	9	T=23.61±20% S=41.2±20%


Пластина X – образная / X-Plate

Пластина X – образная JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 22 x 14 мм, 24 x 18 мм, 30 x 20 мм, 36x20 мм / X-Plate JZQ 01 size 2.7 mm, holes 4, length: 22 x 14 mm, 24 x 18 mm, 30 x 20 mm, 36x20 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие Roughness, µm, outside/inner/others
1.8 ± 0,25	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ±2, мм (mm)	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм / Plate width with tolerance, mm ± mm	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
X-Plate JZQ 01 size 2.7 mm, holes 4, length: 22 x 14 mm	Пластина X – образная JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 22 x 14 мм	24	14	4	T=2.72±20% S=4.74±20%
X-Plate JZQ 01 size 2.7 mm, holes 4, length: 24 x 18 mm,	Пластина X – образная JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 24 x 18 мм,	24	18	4	T=3.5±20% S=6.1±20%
X-Plate JZQ 01 size 2.7 mm, holes 4, length: 30 x 20 mm	Пластина X – образная JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 30 x 20 мм	30	20	4	T=4.86±20% S=8.48±20%
X-Plate JZQ 01 size 2.7 mm, holes 4, length: 36x20 mm	Пластина X – образная JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 36x20 мм	36	20	4	T=5.83±20% S=10.17±20%


Пластина X – образная фиксирующая JZQ 01, размер 2,7 мм, малая/средняя/крупная, длина: 24 x 18 мм, 30 x 20 мм, 36x20 мм / X-Plate Locking JZQ 01 size 2.7 mm, small/medium/large, length: 24 x 18 mm, 30 x 20 mm, 36x20 mm

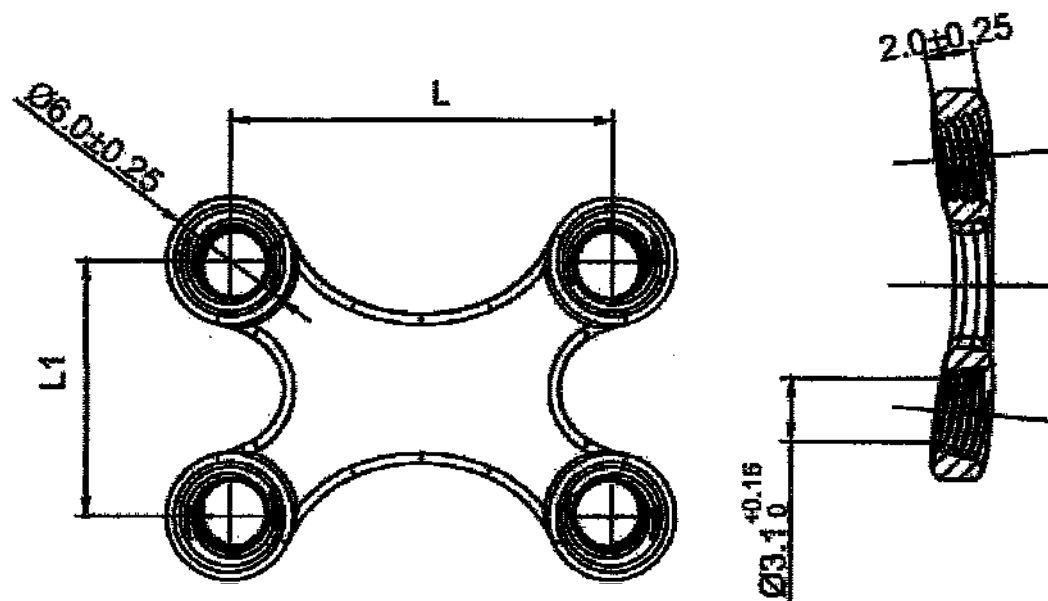

Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
6±0,25	2 ± 0,25	3,1 ₀ ^{+0,15}	4	0,4 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	L1 ±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
X-Plate Locking JZQ 01 size 2.7 mm, small, length: 24 x 18 mm	Пластина X – образная фиксирующая JZQ 01, размер 2,7 мм, малая, длина: 24 x 18 мм	18	12	T=3.89±20% S=6.78±20%
X-Plate Locking JZQ 01 size 2.7 mm, medium, length: 30 x 20 mm	Пластина X – образная фиксирующая JZQ 01, размер 2,7 мм, средняя, длина: 30 x 20 мм	24	14	T=5.4±20% S=9.42±20%
X-Plate Locking JZQ 01 size 2.7 mm, large, length: 36x20 mm	Пластина X – образная фиксирующая JZQ 01, размер 2,7 мм, крупная, длина: 36x20 мм	30	14	T=6.48±20% S=11.3±20%


Пластина X – образная фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, сверхмалая/малая/средняя/ крупная, длина: 23,5 X 15 мм, 27 X 18 мм, 32 X 20 мм, 36 X 20 мм / X-Plate Locking VA JZQ 01 size 2.7 mm, extra small/small/medium/large, length: 23,5 X 15 mm, 27 X 18 mm, 32 X 20 mm, 36 X 20 mm

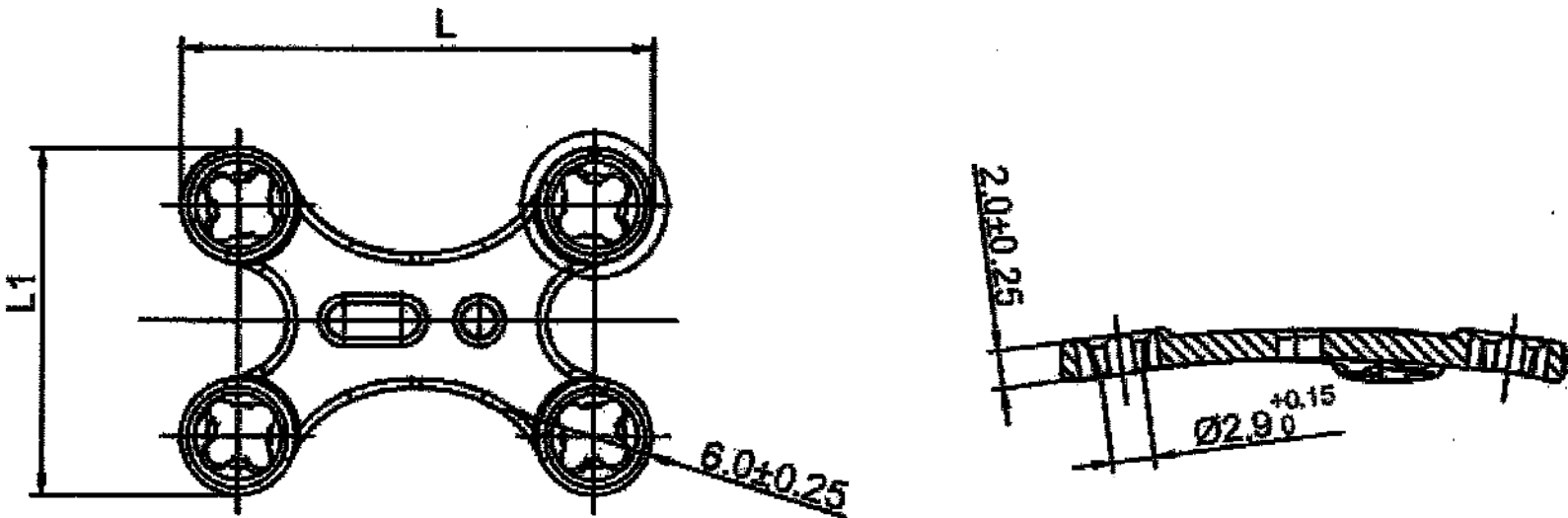

Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
6±0,25	2 ± 0,25	2,9 ^{+0,15} ₀	4	0,4 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$ mm (mm)	$L1 \pm 0,5$ mm (mm)	Масса с погрешностями, $r \pm r$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
X-Plate Locking VA JZQ 01 size 2.7 mm, extra small, length: 23,5 X 15 mm	Пластина X – образная фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, сверхмалая, длина: 23,5 X 15 мм	23,5	15	$T=3.17 \pm 20\%$ $S=5.53 \pm 20\%$
X-Plate Locking VA JZQ 01 size 2.7 mm, small, length: 27 X 18 mm	Пластина X – образная фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, малая, длина: 27 X 18 мм	27	18	$T=4.37 \pm 20\%$ $S=7.63 \pm 20\%$
X-Plate Locking VA JZQ 01 size 2.7 mm, medium, length: 32 X 20 mm,	Пластина X – образная фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, средняя, длина: 32 X 20 мм	32	20	$T=5.76 \pm 20\%$ $S=10.05 \pm 20\%$
X-Plate Locking VA JZQ 01 size 2.7 mm, large, length: 36 X 20 mm	Пластина X – образная фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, крупная, длина: 36 X 20 мм	36	20	$T=6.48 \pm 20\%$ $S=11.3 \pm 20\%$

Пластина X – образная JZQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 4 / X-Plate JZQ 09 size 1.5 mm, holes 4

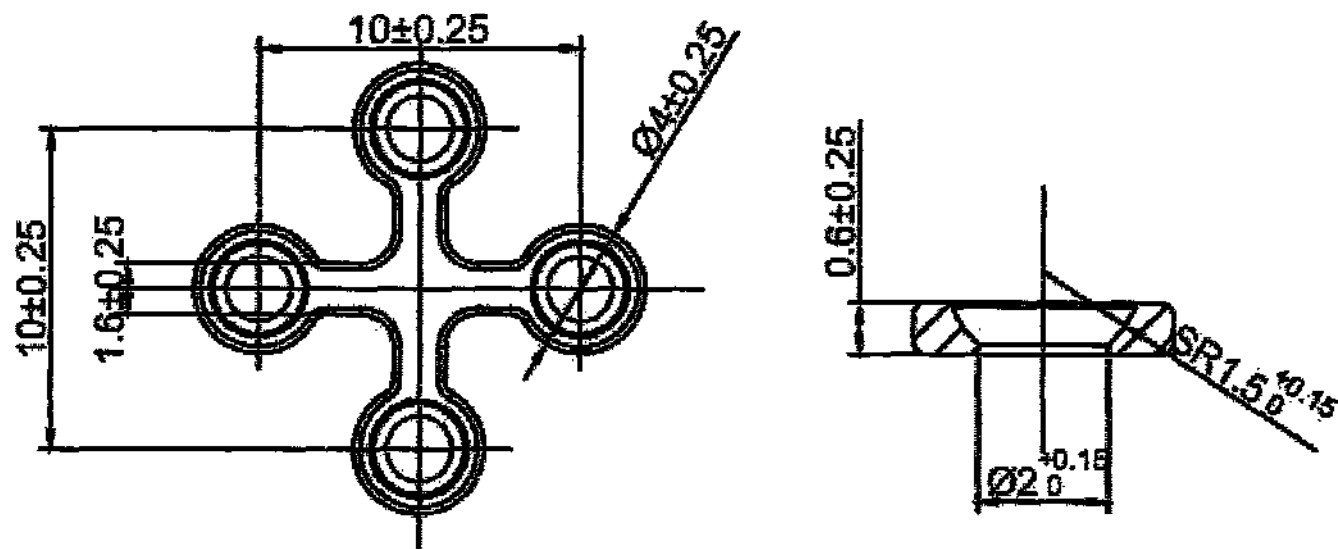

Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
4±0,25	10±0,25	0,6 ± 0,25	2 ^{+0,15} ₀	1,6 ± 0,25	1,5 ^{+0,15} ₀	4	T=0.33±20% S=0.57±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина для кубовидной кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстий 11 / Plate for Cuboid ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes 11

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
30±2	1,8 ± 0,25	20 ± 0,25	11	T=4.86±20% S=8.48±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина для заднего и среднего отдела стопы, ZSQ 04, размер 2.7 мм, отверстия x длина: 5x31 мм, 8x45 мм / Plate for Hind and Midfoot, ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 5x31 mm, 8x45 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	20 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate for Hind and Midfoot, ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 5x31 mm	Пластина для заднего и среднего отдела стопы, ZSQ 04, размер 2.7 мм, отверстия x длина: 5x31 мм	31	5	T=5.02±20% S=8.68±20%
Plate for Hind and Midfoot, ZSQ 04, size 2.7 mm, holes x length: 8x45 mm	Пластина для заднего и среднего отдела стопы, ZSQ 04, размер 2.7 мм, отверстия x длина: 8x45 мм	45	8	T=7.29±20% S=12.8±20%

Пластина пяточная / Calcaneal Plate

Пластина пяточная I ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 10x49 мм, 12x56 мм / Calcaneal Plate I ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 10x49 mm, 12x56 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	25 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Calcaneal Plate I ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 10x49 mm	Пластина пяточная I ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 10x49 мм	49	10	T=9.8±20% S=17.2±20%
Calcaneal Plate I ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 12x56 mm	Пластина пяточная I ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 12x56 мм	56	12	T=11.2±20% S=19.6±20%

Пластина пяточная II ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 11x59 мм, 13x68 мм / Calcaneal Plate II ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 11x59 mm, 13x68 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	30 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Л-42, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Calcaneal Plate II ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 11x59 mm	Пластина пяточная II ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 11x59 мм	59	11	T=14.16±20% S=25±20%
Calcaneal Plate II ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 13x68 mm	Пластина пяточная II ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 13x68 мм	68	13	T=16.23±20% S=28.83±20%

Пластина пяточная III ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 14x60 мм, 14x70 мм / Calcaneal Plate III ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 14x60 mm, 14x70 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	25 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±L2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Calcaneal Plate III ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 14x60 mm	Пластина пяточная III ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 14x60 мм	60	14	T=12±±20% S=21±±20%
Calcaneal Plate III ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 14x70 mm	Пластина пяточная III ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 14x70 мм	70	14	T=14±±20% S=24.5±±20%

Пластина пяточная IV ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 13x79 мм, 15x88 мм / Calcaneal Plate IV ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 13x79 mm, 15x88 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,8 ± 0,25	30 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Calcaneal Plate IV ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 13x79 mm	Пластина пяточная IV ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 13x79 мм	79	13	T=18.71±20% S=33.49±20%
Calcaneal Plate IV ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 15x88 mm	Пластина пяточная IV ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 15x88 мм	88	15	T=21.12±20% S=37.31±20%

Пластина пяточная V ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 20x88 мм / Calcaneal Plate V ZSQ 05, size 3,5 mm, holes x length: 20x88 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
88±2	1,8 ± 0,25	30 ± 0,25	20	T=21.12±20% S=37.31±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина Y-образная / Y-Plate

Пластина Y-образная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x42 мм, 4x24 мм, головка с тремя отверстиями / Y-Plate JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length: 8x42 mm, 4x24 mm, head with three holes

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± 2, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Y-Plate JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length: 8x42 mm, head with three holes	Пластина Y-образная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x42 мм, головка с тремя отверстиями	42	8	T=0.7±20% S=1.09±20%
Y-Plate JZQ 02, size 1.5 mm, holes x length: 4x24 mm, head with three holes	Пластина Y-образная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x24 мм, головка с тремя отверстиями	24	4	T=0.4±20% S=0.69±20%

Пластина Y-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x61,5 мм, 4x35,5 мм, головка с тремя отверстиями / Y-Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 8x61.5 mm, 4x35.5 mm, head with three holes

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± t, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Y-Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 8x61.5 mm, head with three holes	Пластина Y-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x61,5 мм, головка с тремя отверстиями	61,5	8	T=1.7±20% S=2.8±20%
Y-Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 4x35.5 mm, head with three holes	Пластина Y-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x35,5 мм, головка с тремя отверстиями	35,5	4	T=0.85±20% S=1.48±20%

Пластина Y-образная фиксирующая YSQ 01 размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с тремя отверстиями / Y-Plate Locking YSQ 01 size 1.5 mm, holes 8, head with three holes


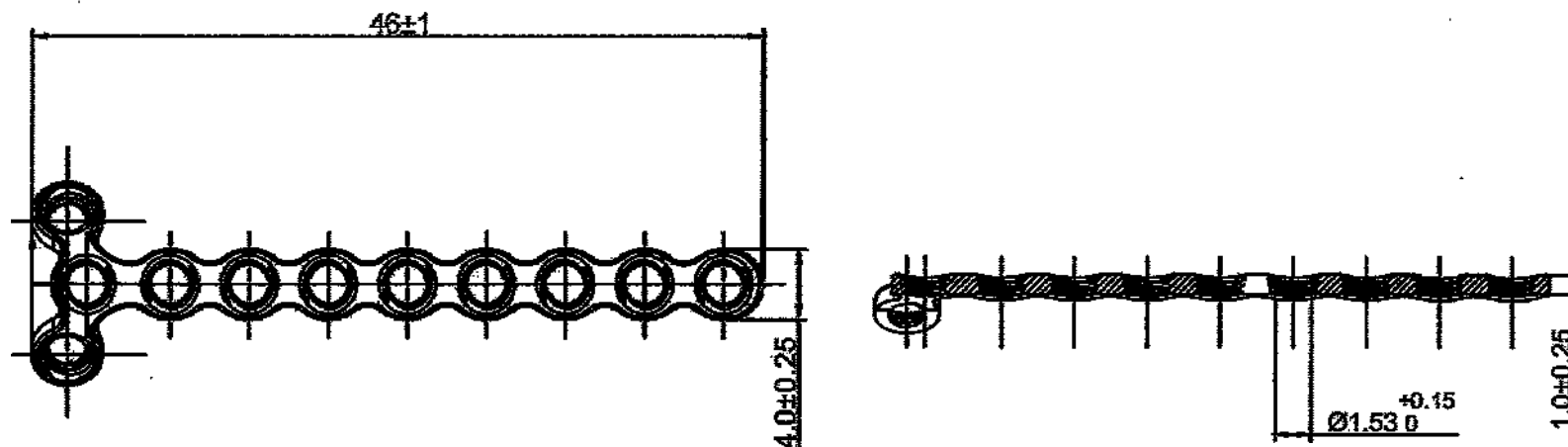


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм мм ± мм	Диаметр отверстий с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
46±1	4 ± 0,25	1 ± 0,25	1,53 ^{+0,15} ₀	8	T=0.91±20% S=1.58±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина Y-образная фиксирующая YSQ 01 размер 1,3 мм, отверстий 8, головка с тремя отверстиями / Y-Plate Locking YSQ 01 size 1.3 mm, holes 8, head with three holes


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
42±2	1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	8	T=1.7±20% S=2.97±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина Y-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 2,0 мм/2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий 7 / Y-Plate Locking Compression (LCP) YSQ 01 size 2.0 mm/2.4 mm, head with three holes, holes 7, head with three holes

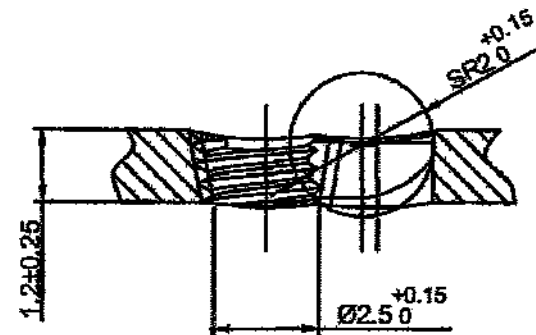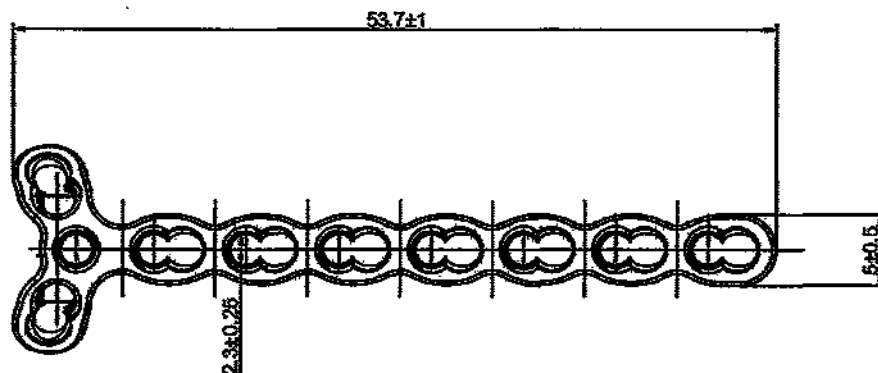

Пластина Y-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 2,0 мм


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others
53,7±1	5 ± 0,5	1,2 ± 0,25	2,3 ± 0,25	2,5 ₀ ^{+0,15}	7	2 ₀ ^{+0,15}	T=1.46±20% S=2.54±20%	0,4 0,8 1,6

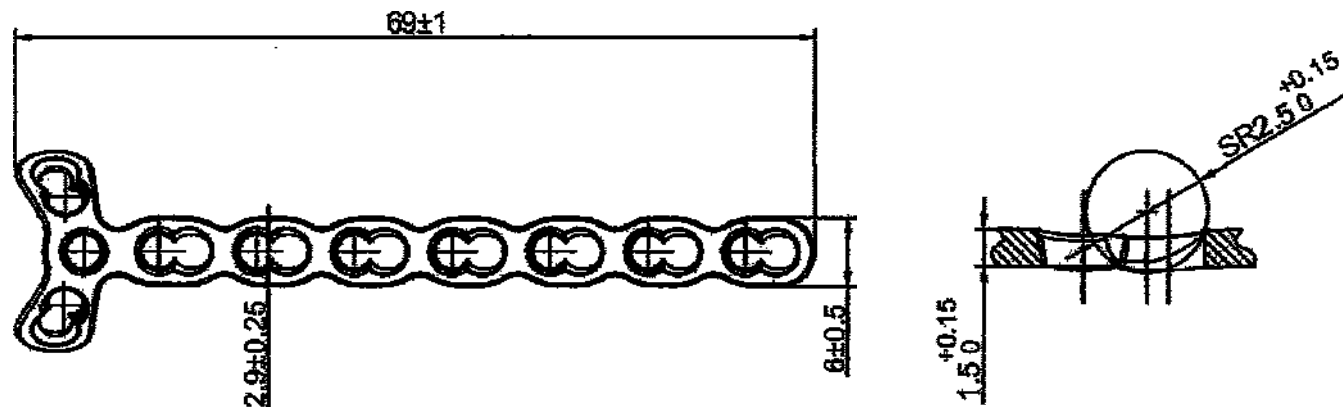

Пластина Y-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 2,4 мм



Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
69±1	6 ± 0,5	1,5 ₀ ^{+0.15}	2,9 ± 0,25	7	2,5 ₀ ^{+0.15}	T=2.81±20% S=4.91±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина Y-образная JZQ 03, размер 1,5 мм, отверстия 5 / Y-Plate JZQ 03, size 1.5 mm, holes 5

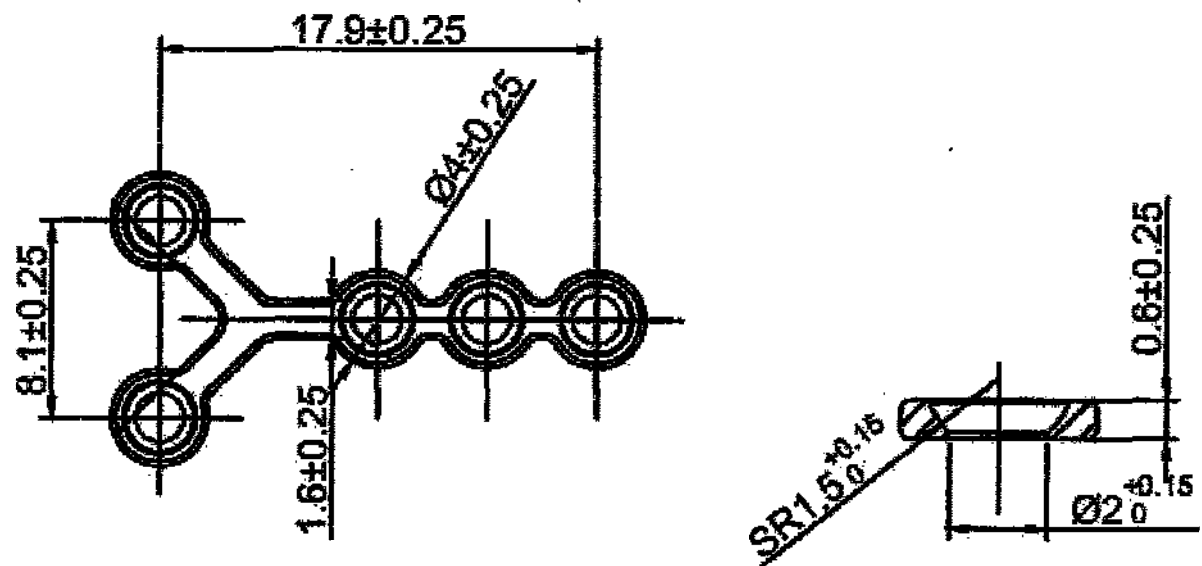



Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
$0,6 \pm 0,25$	$1,6 \pm 0,25$	$4 \pm 0,25$	$17,9 \pm 0,25$ $8,1 \pm 0,25$	$2^{+0.15}_0$	$1,5^{+0.15}_0$	5	T=0.14±20% S=0.25±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина Y-образная двойная JZQ 03, размер 1,5 мм/2,0 мм, отверстий 6 / Y-Plate Double JZQ 03, size 1.5 mm/2.0 mm, holes 6

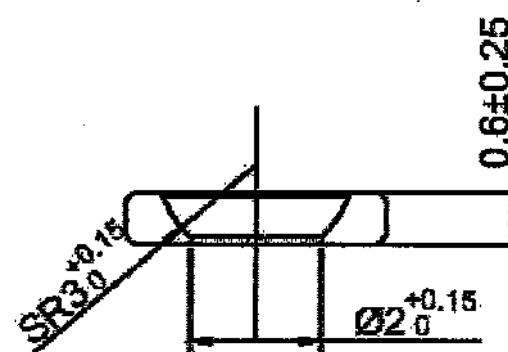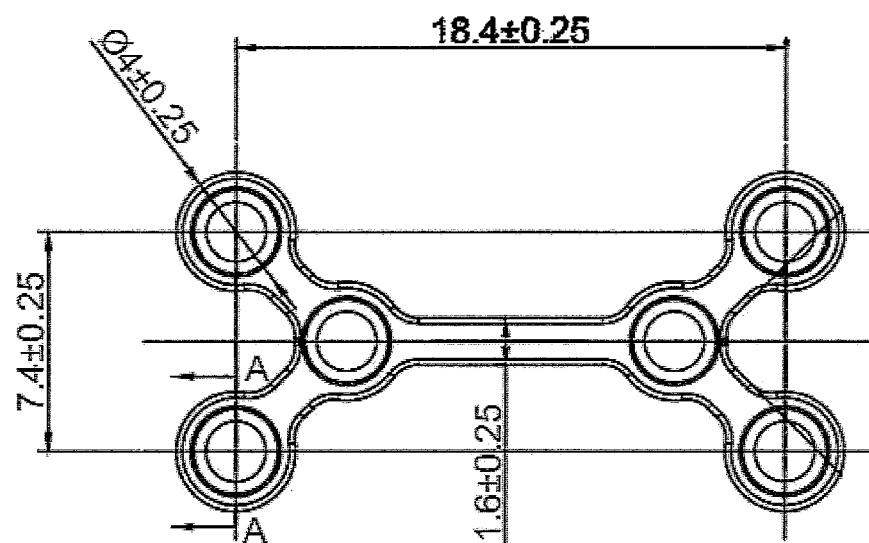

Пластина Y-образная двойная JZQ 03, размер 1,5 мм

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6 ± 0,25	4 ± 0,25	18,4 ± 0,25 7,4 ± 0,25	1,6 ± 0,25	2 ^{+0.15} ₀	3 ^{+0.15} ₀	6	T=0.25±20% S=0.43±20%	0,4 0,8 3,2

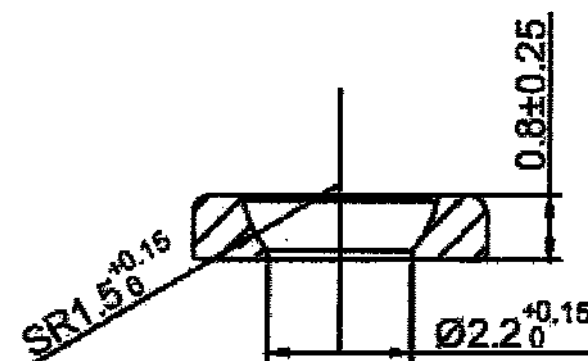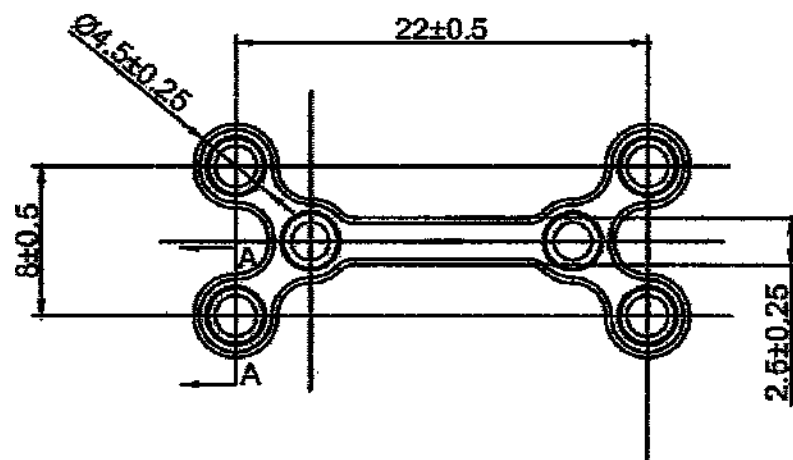

Пластина Y-образная двойная JZQ 03, размер 2,0 мм

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
0,8 ± 0,25	4,5 ± 0,25	22 ± 0,25 8 ± 0,25	1,6 ± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	6	T=0.59±20% S=1.02±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина мышелковая / Condylar Plate

Пластина мышелковая JZQ 02, головка с двумя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x36 мм, 4x22 мм / Condylar Plate JZQ 02, head with two holes, size 1.5 mm, holes x length: 6x36 mm, 4x22 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Condylar Plate JZQ 02, head with two holes, size 1.5 mm, holes x length: 6x36 mm	Пластина мышелковая JZQ 02, головка с двумя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x36 мм	36	6	T=0.72±20% S=1.26±20%
Condylar Plate JZQ 02, head with two holes, size 1.5 mm, holes x length: 4x22 mm	Пластина мышелковая JZQ 02, головка с двумя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x22 мм	22	4	T=0.51±20% S=0.9±20%

Пластина мыщелковая небольшая JZQ 03, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x45,5 мм /
 Condylar Plate mini JZQ 03, head with one hole, Pin right /left, size 2.0 mm, holes x length: 6x45,5 mm

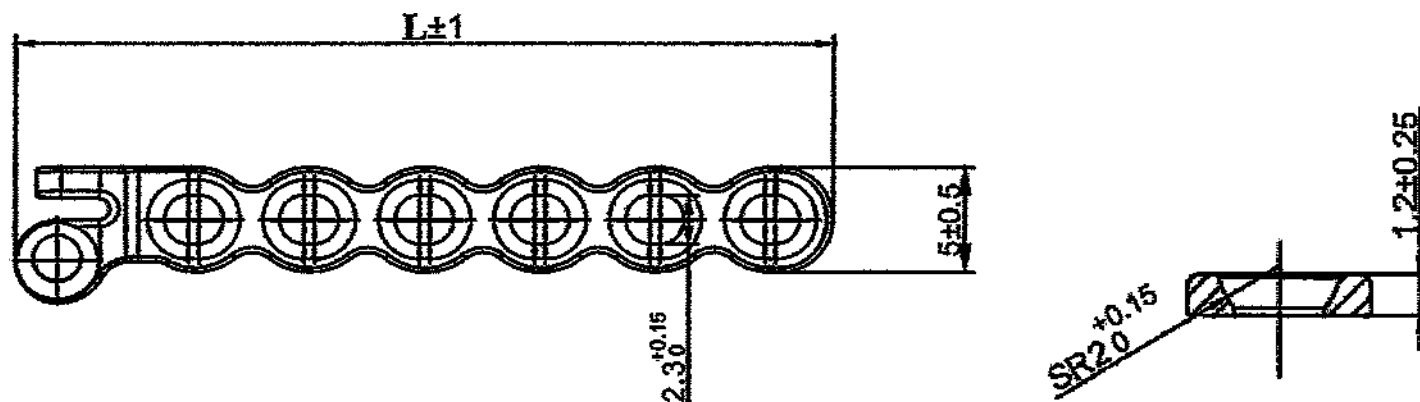


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
45,5±1	5 ± 0,5	1,2 ± 0,25	2,3 ^{+0.15} ₀	6	2 ^{+0.15} ₀	T=1.23±20% S=2.14±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина мышелковая небольшая JSQ 01, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 2,0 мм, отверстий 6 / Condylar Plate mini JSQ 01, head with one hole, Pin right /left, size 2.0 mm, holes 6

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
45.5±1	5 ± 0,5	1,2 ± 0,25	6	T=1.04±20% S=1.81±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина мышечковая небольшая JSQ 01, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 1,5 мм, отверстий 6 / Condylar Plate mini JSQ 01, head with one hole, Pin right /left, size 1.5 mm mm, holes 6

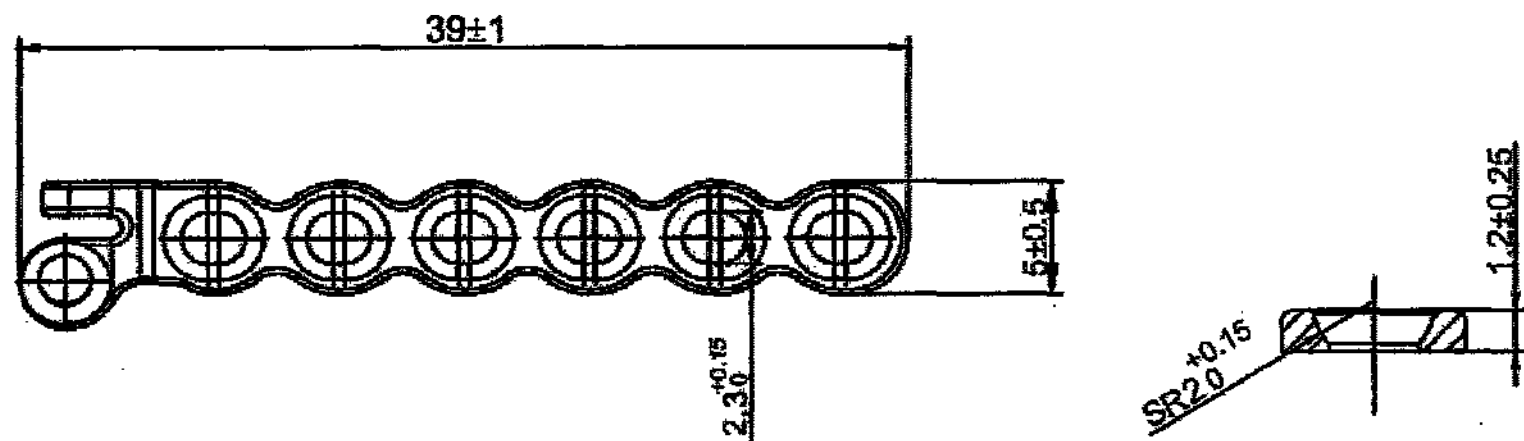

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others μm
39±1	5 ± 0,5	1,2 ± 0,25	2,3 ₀ ^{+0.15}	6	2 ₀ ^{+0.15}	T=1.05±20% S=1.83±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 90 мм, 7 x 120 мм, 9 x 150 мм, 12 x 200 мм, длина клинка: 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм / Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 90 mm, 7 x 120 mm, 9 x 150 mm, 12 x 200 mm, Blade Length: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 90 mm, Blade Length: 50 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 90 мм, длина клинка: 50 мм	90	50	5	T=40.85±20% S=71.22±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 90 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 90 мм, длина клинка: 60 мм	90	60	5	T=43.74±20% S=76.3±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 90 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 90 мм, длина клинка: 70 мм	90	70	5	T=46.66±20% S=81.33±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 90 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 90 мм, длина клинка: 80 мм	90	80	5	T=49.57±20% S=87.53±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 120 mm, Blade Length: 50 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 120 мм, длина клинка: 50 мм	120	50	7	T=48.98±20% S=86.47±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 120 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 120 мм, длина клинка: 60 мм	120	60	7	T=52.48±20% S=91.56±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 120 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 120 мм, длина клинка: 70 мм	120	70	7	T=55.4±20% S=96.65±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 120 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина мыщелковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 120 мм, длина клинка: 80 мм	120	80	7	T=58.32±20% S=102.84±20%

Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 150 mm, Blade Length: 50 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 150 мм, длина клинка: 50 мм	150	50	9	T=57.13±20% S=101.73±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 150 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 150 мм, длина клинка: 60 мм	150	60	9	T=61.23±20% S=106.82±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 150 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 150 мм, длина клинка: 70 мм	150	70	9	T=64.15±20% S=111.9±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 150 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 150 мм, длина клинка: 80 мм	150	80	9	T=67.07±20% S=117±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 200 mm, Blade Length: 50 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 200 мм, длина клинка: 50 мм	200	50	12	T=72.9±20% S=127.17±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 200 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 200 мм, длина клинка: 60 мм	200	60	12	T=75.82±20% S=132.25±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 200 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 200 мм, длина клинка: 70 мм	200	70	12	T=78.73±20% S=137.34±20%
Condylar Plate 95° YSQ 36 holes x Shaft Length: 5 x 200 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина мышечковая 95°, YSQ 36, отверстия x длина стержня: 5 x 200 мм, длина клинка: 80 мм	200	80	12	T=81.64±20% S=142.43±20%

Пластина с крючком при толчковом переломе JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 1x8,5 мм / Plate with Avulsion Fracture Hook JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 1x8,5 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
8.5±1	4 ± 0,25	1,2 ± 0,25	6	T=0.21±20% S=0.38±20%	0,4 0,8 1,6

Пластина Z-образная / Z-Plate

Пластина Z-образная JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 9x24,5 мм, 13x34,5 мм / Z-Plate JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 9x24,5 mm, 13x34,5 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1 ± 0,25	11.7 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Z-Plate JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 9x24,5 mm	Пластина Z-образная JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 9x24,5 мм	24,5	9	T=0.55±20% S=0.96±20%
Z-Plate JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 13x34,5 mm	Пластина Z-образная JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 13x34,5 мм	34,5	13	T=0.77±20% S=1.35±20%

Пластина Z-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 9x31 мм, 13x44 мм / Z-Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 9x31 mm, 13x44 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм; внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	14,9 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Z-Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 9x31 mm	Пластина Z-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 9x31 мм	31	9	T=1.17±20% S=2±20%
Z-Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 13x44 mm	Пластина Z-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 13x44 мм	44	13	T=1.66±20% S=2.9±20%


Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 9, 13 / Z-Plate Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 9, 13

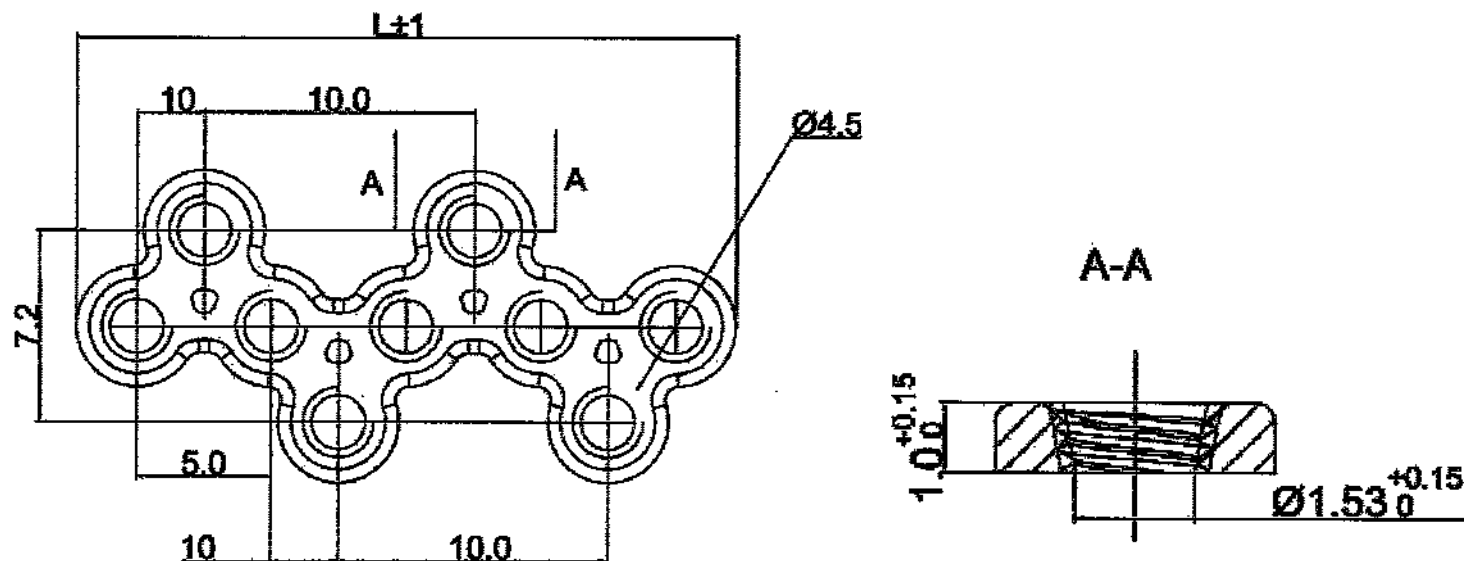

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, mm, outside/inner/others
$1_0^{+0.15}$	$5 \pm 0,5$ $7,2 \pm 0,25$ $10 \pm 0,5$	$1,53_0^{+0.15}$	$4,5 \pm 0,25$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Z-Plate Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 9	Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 9	24,5	9	T=1.06±20% S=1.85±20%
Z-Plate Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 13	Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 13	34,5	13	T=1.49±20% S=2.6±20%

Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 9, 13 / Z-Plate Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 9, 13

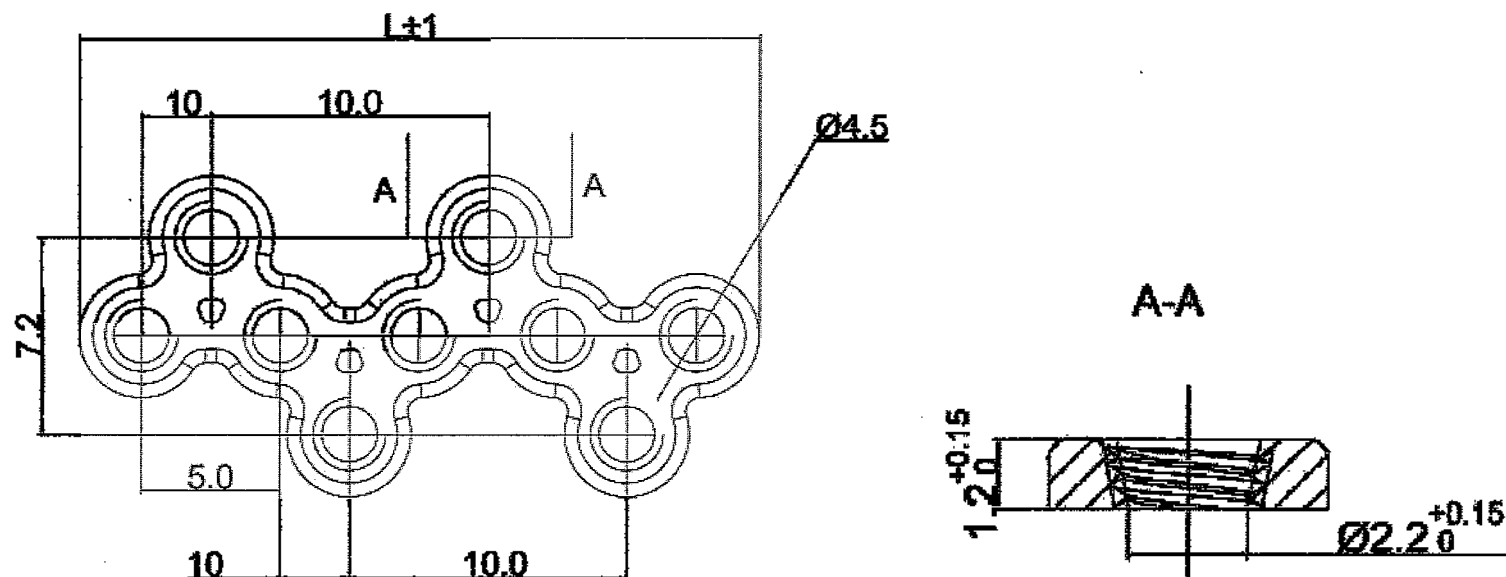

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояния между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ^{+0,15} ₀	5±0,5 7,2±0,25 10±0,5	2,2 ^{+0,15} ₀	4,5±0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Z-Plate Locking YSQ 09 size 2,0 mm, holes: 9	Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 9	20,8	9	T=1.67±20% S=2.92±20%
Z-Plate Locking YSQ 09 size 2,0 mm, holes: 13	Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 13	43,2	13	T=2.38±20% S=4.14±20%

Пластина сетчатая / Plate Grid

Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x11 мм, 6x17,5 мм, 8x24 мм, 10x30,5 мм, 12x37 мм / Plate Grid JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 4x11 mm, 6x17,5 mm, 8x24 mm, 10x30,5 mm, 12x37 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1.2±0.25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт. (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Grid JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 4x11 mm	Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 4x11 мм	11	4	T=0.21±20% S=0.38±20%
Plate Grid JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 6x17,5 mm	Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x17,5 мм	17,5	6	T=0.315±20% S=0.57±20%
Plate Grid JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 8x24 mm,	Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x24 мм	24	8	T=0.42±20% S=0.76±20%
Plate Grid JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 10x30,5 mm	Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 10x30,5 мм	30,5	10	T=0.52±20% S=0.95±20%
Plate Grid JZQ 01, size 1.5 mm, holes x length: 12x37 mm	Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 12x37 мм	37	12	T=0.63±20% S=1.14±20%

Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x13 мм, 6x22 мм, 8x30 мм, 10x38 мм, 12x46 мм, 14x54 мм, 16x62 мм / Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 4x13 mm, 6x22 mm, 8x30 mm, 10x38 mm, 12x46 mm, 14x54 mm, 16x62 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	13 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 4x13 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x13 мм	13	4	T=0.54±20% S=0.942±20%
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 6x22 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x22 мм	22	6	T=0.81±20% S=1.413±20%
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 8x30 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x30 мм	30	8	T=1±20% S=1.8±20%
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 10x38 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 10x38 мм	38	10	T=1.25±20% S=2.36±20%
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 12x46 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 12x46 мм	46	12	T=1.6±20% S=2.8±20%
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 14x54 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 14x54 мм	54	14	T=1.8±20% S=3.2±20%
Plate Grid JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 16x62 mm	Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 16x62 мм	62	16	T=2±20% S=3.6±20%


Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2 / Plate Grid Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 4-12 increments
2

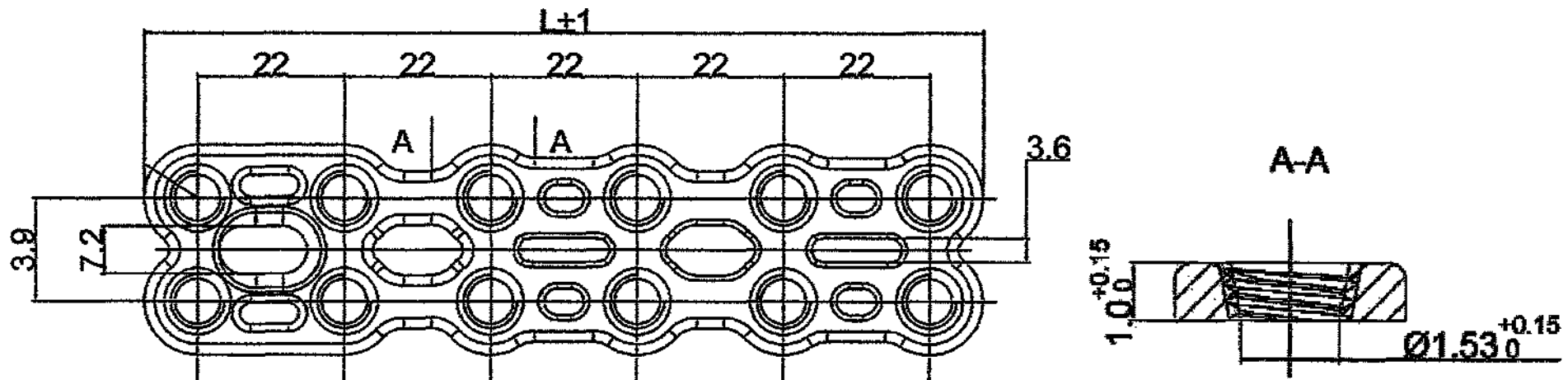

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
$1_0^{+0.15}$	22 ± 0.5	$1.53_0^{+0.15}$	3.6 ± 0.25 3.9 ± 0.25 7.2 ± 0.25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Grid Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 4	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 4	9,5	4	T=0.59±20% S=1.04±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 6	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 6	15	6	T=0.95±20% S=1.65±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 8	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 8	20,5	8	T=1.3±20% S=2.26±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 10	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 10	26	10	T=1.65±20% S=2.87±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 1.5 mm, holes: 12	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 12	31,5	12	T=2±20% S=3.49±20%

Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2 / Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 4-16 increments
2

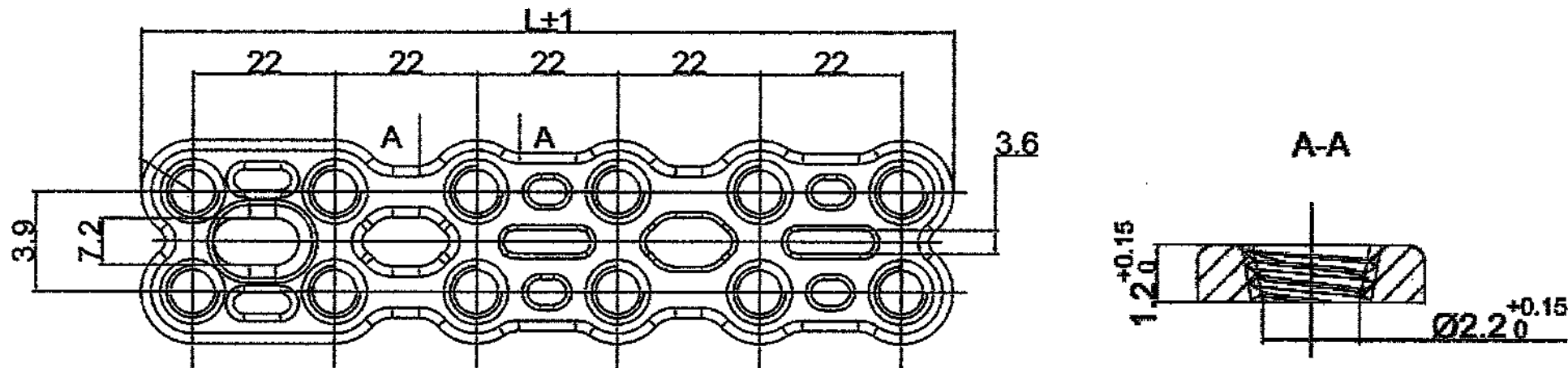

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояния между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ^{+0,15} ₀	22±0,5	2,2 ^{+0,15} ₀	3,6±0,25 3,9±0,25 7,2±0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 4	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 4	1,7	4	T=0.91±20% S=1.59±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 6	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 6	8,2	6	T=1.54±20% S=2.69±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 8	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 8	24,7	8	T=2.11±20% S=3.67±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 10	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 10	31,2	10	T=2.67±20% S=4.65±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 12	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 12	37,7	12	T=2.23±20% S=5.63±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 14	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 14	44,2	14	T=3.79±20% S=6.61±20%
Plate Grid Locking YSQ 09 size 2.0 mm, holes: 16	Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 16	50,7	16	T=4.35±20% S=7.59±20%

Пластина коррекционная / Plate Correction

Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34,5 мм, 5x42 мм / Plate Correction Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34.5 mm, 5x42 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Е ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Correction Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34.5 mm	Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34,5 мм	34,5	4	T=0.9±20% S=1.57±20%
Plate Correction Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 5x42 mm	Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 5x42 мм	42	5	T=1.09±20% S=1.9±20%

Пластина коррекционная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x36 мм / Correction Plate JZQ 03, size 2.0 mm, holes x length: 6x36 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
36±2	1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	6	Г=0.9±20% S=1.57±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 4x35,5 мм, 5x44 мм / Plate Correction Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.4 mm, holes x length: 4x35.5 mm, 5x44 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	l ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Correction Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 4x34.5 mm	Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 4x34,5 мм	34,5	4	T=1.16±20% S=2.03±20%
Plate Correction Rotation JZQ 03, head with two holes, size 2.0 mm, holes x length: 5x42 mm	Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 5x42 мм	42	5	T=1.44±20% S=2.51±20%

Пластина коррекционная JZQ 01 размер 1,5 мм, отверстия x длина: 6x28 мм / Plate Correction JZQ 01 size 1.5 mm, holes x length: 6x28 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
28±2	1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	6	T=0.39±20% S=0.68±20%	0,8 1,6 3,2

Титановый кабель JZQ 02, диаметр 1,7 мм, длина 500 мм / Titanium Cable JZQ 02, diameter 1,7 mm, length 500 mm

Длина с погрешностями, мм ± мм	Ширина с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие
Length with tolerance, mm ± mm	Width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm ; outside/inner/others
500±5	2 ± 0,25	1,7 ± 0,15	T=7±20%	0,8 1,6 3,2

Обжим для кабеля JZQ 02, размер 1,8 мм / Crimp for Cable JZQ 02, size 1.8 mm

Длина с погрешностями, мм ± мм	Ширина с погрешностями, мм ± мм	Толщина с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие мкм
Length with tolerance, mm ± mm	Width with tolerance, mm ± mm	Thickness with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
14.7±3	6.3 ± 0,25	5,25 ± 0,25	T=2.18±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) / Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP)

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм, 2x82 мм, 4x108 мм, 6x134 мм / Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x69 mm, 2x82 mm, 4x108 mm, 6x134 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x69 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм	69	1	T=20.25±20% S=35.2±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x82 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x82 мм	82	2	T=24±20% S=41.9±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 4x108 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x108 мм	108	4	T=31.6±20% S=55.2±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 6x134 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x134 мм	134	6	T=39.3±20% S=68.6±20%

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x72 мм, 2x85 мм, 4x111 мм, 6x137 мм / Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04 with Extension, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x72 mm, 2x85 mm, 4x111 mm, 6x137 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04 with Extension, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 1x72 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x72 мм	72	1	T=12.9±20% S=24±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04 with Extension, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 2x85 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x85 мм	85	2	T=15.2±20% S=28.3±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04 with Extension, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 4x111 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x111 мм	111	4	T=19.8±20% S=37±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Humeral ZSQ 04 with Extension, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length 6x137 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x137 мм	137	6	T=24.5±20% S=45.6±20%

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x112 мм, 6x142 мм, 8x172 мм, 10x202 мм, 12x232 мм / Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 4x112 mm, 6x142 mm, 8x172 mm, 10x202 mm, 12x232 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	13 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 4x112 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x112 мм	112	4	T=23.58±20% S=41.14±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 6x142 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x142 мм	142	6	T=29.9±20% S=52.16±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 8x172 mm,	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 8x172 мм	172	8	T=36.22±20% S=63.18±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 10x202 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 10x202 мм	202	10	T=42.54±20% S=74.21±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7/3.5 mm, holes x length: 12x232 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 12x232 мм	232	12	T=48.86±20% S=85.23±20%

Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 3x75 мм, 4x88 мм, 7x127 мм, 9x153 мм / Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 without lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 3x75 mm, 4x88 mm, 7x127 mm, 9x153 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	13,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 without lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 3x75 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 3x75 мм	75	3	T=11.84±20% S=20.66±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 without lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 4x88 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x88 мм	88	4	T=13.89±20% S=24.24±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 without lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 7x127 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 7x127 мм	127	7	T=20.1±20% S=34.99±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 without lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 9x153 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 9x153 мм	153	9	T=24.16±20% S=42.15±20%


Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 3x75 мм, 4x88 мм, 7x127 мм, 9x153 мм / Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 with lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 3x75 mm, 4x88 mm, 7x127 mm, 9x153 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,6 ± 0,25	13,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 with lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 3x75 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 3x75 мм	75	3	T=12.04±20% S=20.96±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 with lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 4x88 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x88 мм	88	4	T=14.09±20% S=24.54±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 with lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 7x127 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 7x127 мм	127	7	T=20.3±20% S=35.29±20%
Plate Medial Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsolateral for Humeral, right/left, ZSQ 04 with lateral support. size 2,7/3,5 mm, holes x length: 9x153 mm	Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 9x153 мм	153	9	T=24.36±20% S=42.45±20%


Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) / L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP)

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя/тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм / L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal Radius, right angle, head with two/three holes JZQ 03, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 5x51 mm

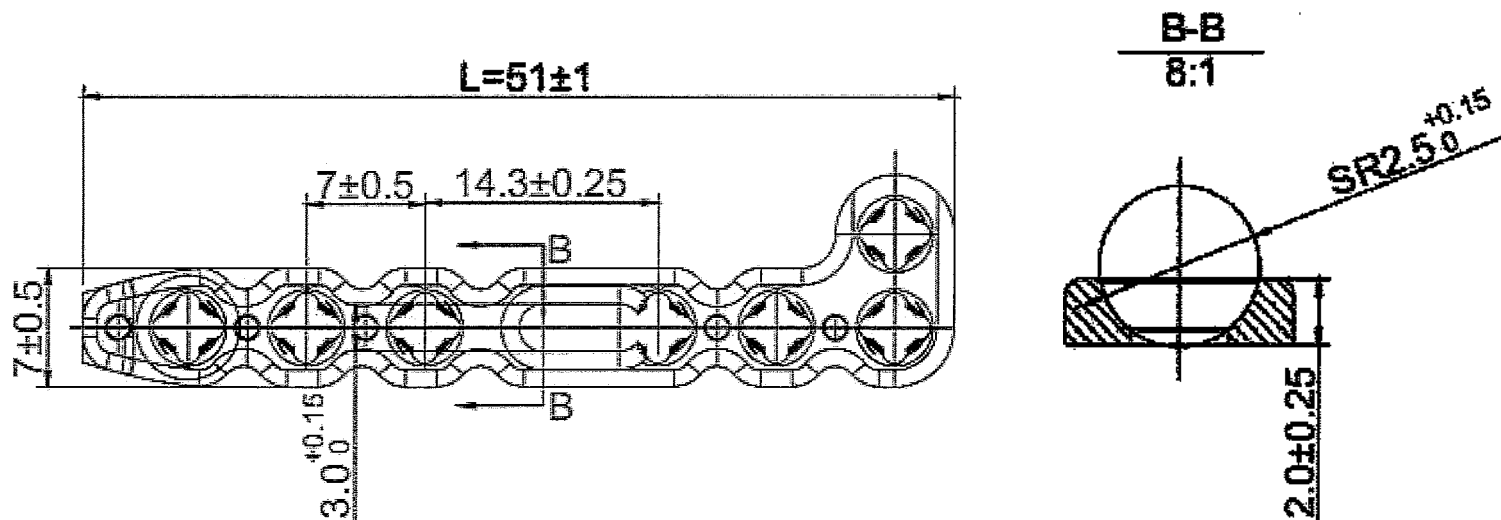

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
51±1	2±0,25	7 ± 0,5 14,3 ± 0,25	7 ± 0,5	3 ^{+0,15} ₀	5	2,5 ^{+0,15} ₀	T=3.11±20% S=5.5±20%	0,8 1,6 3,2

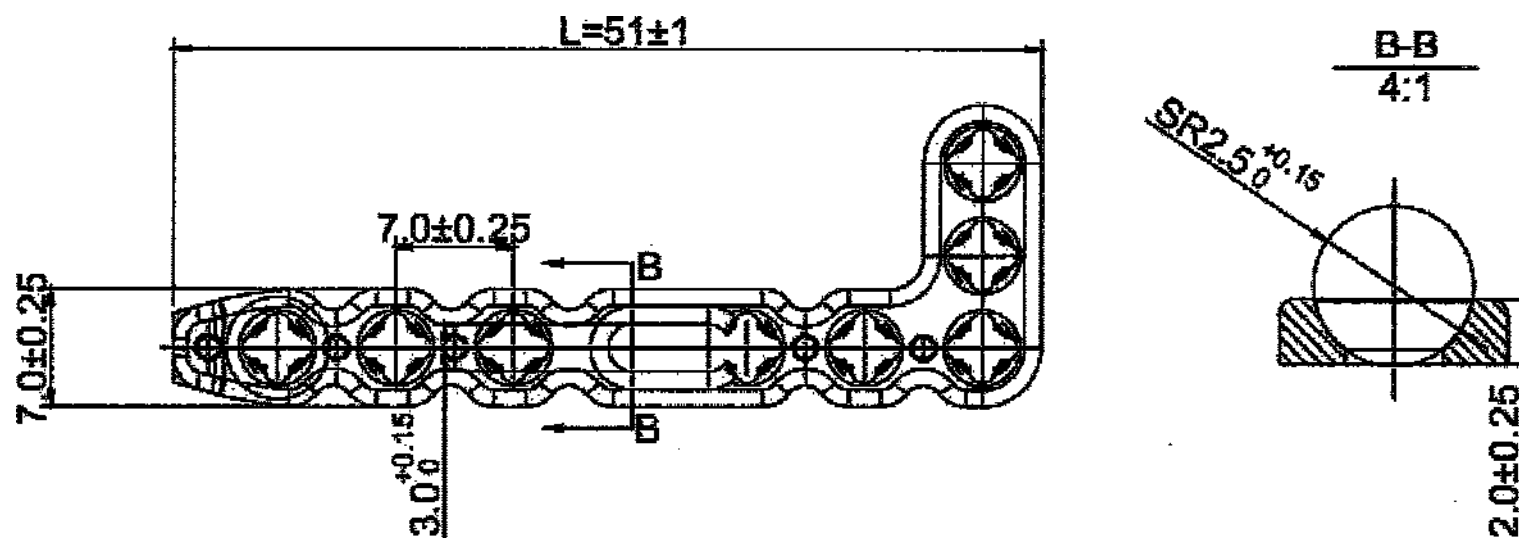

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
51±1	2± 0,25	7 ± 0,25	7 ± 0,25	3 ₀ ^{+0,15}	5	2,5 ₀ ^{+0,15}	T=3.21±20% S=5.6±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x55 мм / L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal Radius, oblique, head with three holes JZQ 03, right/left, size 2.4 mm, holes x length: 5x55 mm

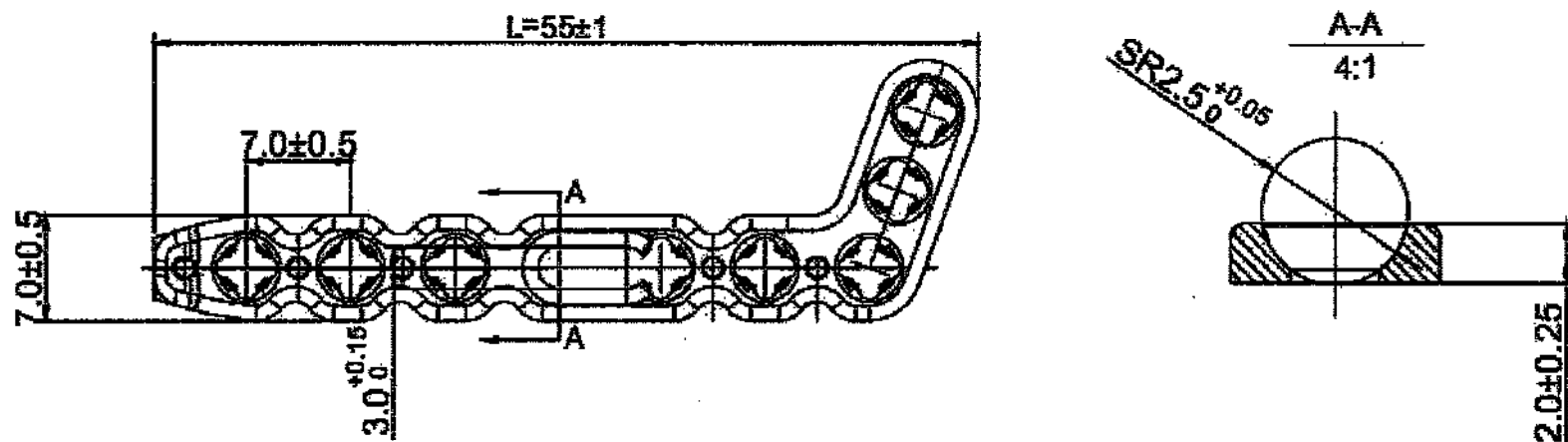


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
55±1	2±0,25	7 ± 0,5	7 ± 0,5	3 ₀ ^{+0,15}	5	2,5 ₀ ^{+0,05}	T=3.47±20% S=6.04±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм, 6x90 мм / L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 4x72 mm, 6x90 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, mm, outside/inner/others
3 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), мм (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 4x72 mm	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм	72	4	T=10.62±20% S=18.65±20%
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Posterolateral for Tibial ZSQ 04, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 6x90 mm	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 6x90 мм	90	6	T=13.36±20% S=23.31±20%


Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол/наклонная, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий: 3, 4 / L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, right angle/ oblique, head with 2/3 Holes, holes: 3, 4

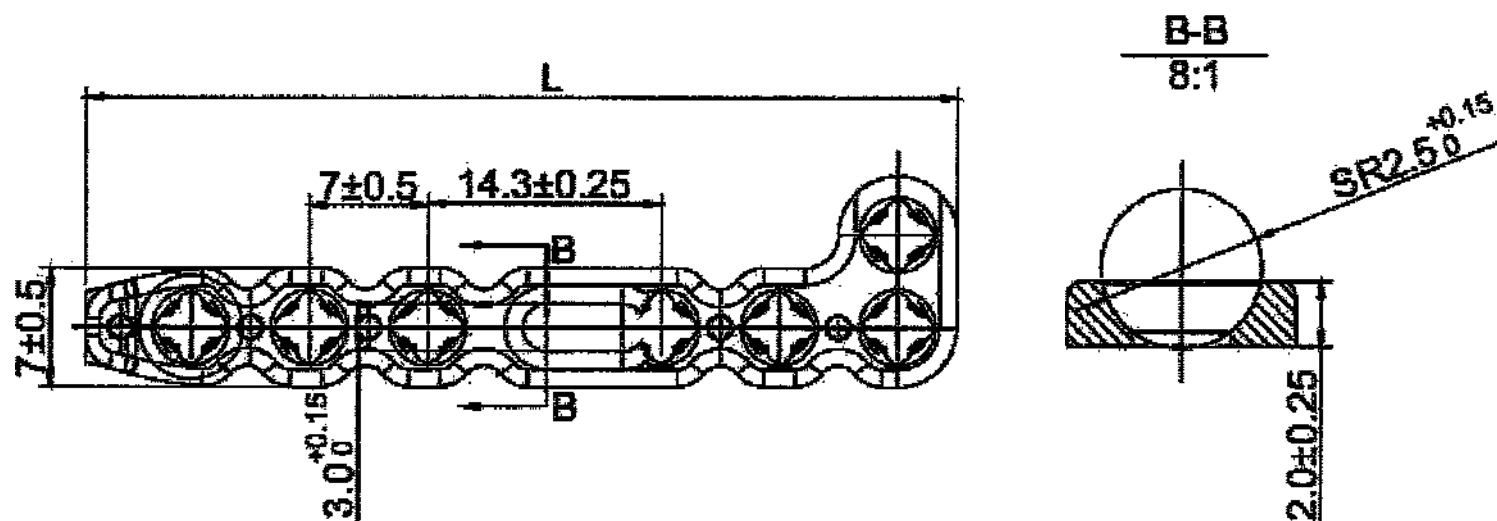

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол, головка с двумя отверстиями, отверстий: 3, 4

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстий с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
2± 0,25	7 ± 0,5 14,3 ± 0,25	7 ± 0,5	3 ^{+0,15} ₀	5	2,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, right angle, head with 2 Holes, holes: 3	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол, головка с двумя отверстиями, отверстий: 3	37	3	T=2.13±20% S=3.96±20%
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, right angle, head with 2 Holes, holes: 4	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол, головка с двумя отверстиями, отверстий: 4	44	4	T=2.67±20% S=4.73±20%

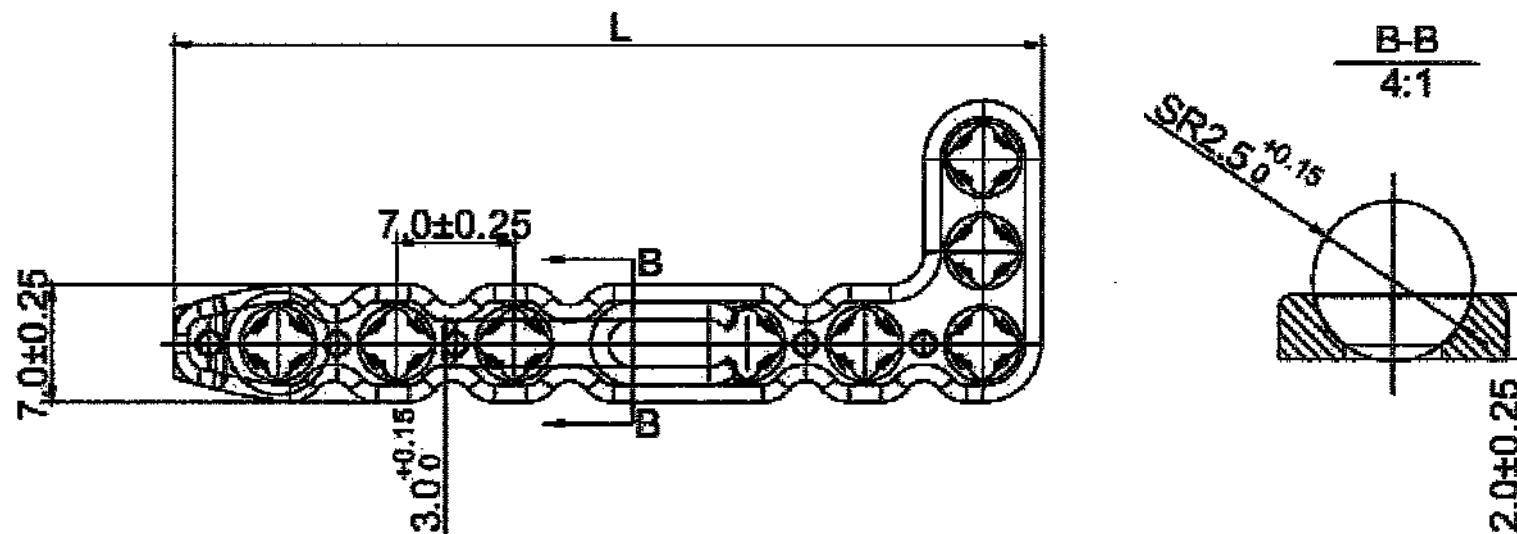

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
2±0,25	7±0,25	7±0,25	3 ₀ ^{+0,15}	5	2,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3	37	3	T=2.33±20% S=4.06±20%
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, right angle, head with 3 Holes, holes: 4	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 4	44	4	T=2.77±20% S=4.83±20%

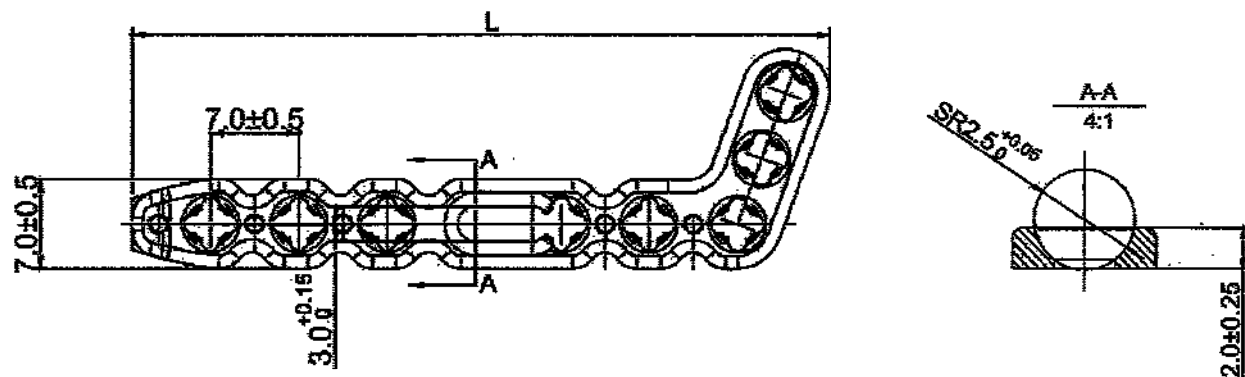

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, наколонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	7 ± 0,5	7 ± 0,5	3 ^{+0.15} ₀	5	2,5 ^{+0.05} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Е±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г±г / Mass with tolerances, g±g
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3,	41	3	T=2.58±20% S=4.5±20%
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for Radius YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, oblique, head with 3 Holes, holes: 3	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3,	48	4	T=3.02±20% S=5.27±20%

Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм,наколонная, головка с двумя отверстиями, отверстий: 3, 4/ L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for RadiusYSQ 12, right/left, size 2.4 mm, oblique, head with 2 Holes, holes: 3, 4

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2± 0,25	8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г /Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for RadiusYSQ 12, right/left, size 2.4 mm, oblique, head with 2 Holes, holes: 3	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм,наколонная, головка с двумя отверстиями, отверстий: 3	41	3	T=2.9±20% S=5.15±20%
L-Plate Distal Locking Compression Distal with Variable Angle (VA-LCP) Dorsal for RadiusYSQ 12, right/left, size 2.4 mm, oblique, head with 2 Holes, holes: 4	Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм,наколонная, головка с двумя отверстиями, отверстий: 4	49	4	T=3.5±20% S=6.15±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная / L-Plate Maxillary

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая /
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
0,7± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: короткая	19,3	T=0.24±20% S=0.42±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: средняя	24,7	T=0.31±20% S=0.54±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная	30,2	T=0.38±20% S=0.66±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая / L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,7± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: короткая	27,8	T=0.35±20% S=0.61±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: средняя	32,8	T=0.41±20% S=0.72±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная	37,8	T=0.47±20% S=0.83±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная анатомическая JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая / L-Plate Maxillary anatomic JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,7± 0,25	3.8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±3, мм.(mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary anatomic JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная анатомическая JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: короткая	26,1	T=0.31±20% S=0.54±20%
L-Plate Maxillary anatomic JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная анатомическая JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: средняя	30,1	T=0.36±20% S=0.63±20%
L-Plate Maxillary anatomic JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная анатомическая JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная	34,1	T=0.4±20% S=0.71±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая
/ L-Plate Maxillary JZQ 03 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,8 ± 0,25	4,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: короткая	23,2	T=0.35±20% S=0.61±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: средняя	38,2	T=0.43±20% S=0.74±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная	32,2	T=0.49±20% S=0.85±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая / L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm: outside/inner/others
0,8 ± 0,25	4,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: короткая	34,9	T=0.53±20% S=0.92±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: средняя	39,9	T=0.6±20% S=1.05±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная	44,9	T=0.67±20% S=1.18±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая / L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,8 ± 0,25	4,2 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: короткая	29,4	T=0.44±20% S=0.77±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: средняя	33,4	T=0.5±20% S=0.88±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная	37,4	T=0.56±20% S=0.99±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая
/ L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
0,5 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: короткая	15,3	T=0.13±20% S=0.24±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: средняя	20,3	T=0.18±20% S=0.32±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, 90-Degree, right/left, size 2.0 mm, holes: 2+2, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная	25,3	T=0.22±20% S=0.39±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая / L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
0,5 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: короткая	23,5	T=0.21±20% S=0.37±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая	29	T=0.26±20% S=0.45±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая	34,5	T=0.31±20% S=0.54±20%

Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая / L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long/medium/short

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,5 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: short	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: короткая	24,5	T=0.22±20% S=0.38±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: medium	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: средняя	29,5	T=0.27±20% S=0.46±20%
L-Plate Maxillary JZQ 03, anatomic, right/left, size 2.0 mm, holes: 3+3, length: long	Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная	34,5	T=0.32±20% S=0.55±20%

Пластина I-образная верхнечелюстная / I-Plates Maxillary

Пластина I-образная верхнечелюстная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия 4, толщина 0,6 мм / I-Plates Maxillary JZQ 03, size 2.0 mm, holes 4, thickness 0.6 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
16,5±3	0,5 ± 0,25	4 ± 0,25	4	T=0.15±20% S=0.26±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина I-образная верхнечелюстная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия 4, толщина 0,8 мм / I-Plates Maxillary JZQ 03, size 2.0 mm, holes 4, thickness 0.8 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
16,7±3	0,7 ± 0,25	4,2 ± 0,25	4	T=0.22±20% S=0.38±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина верхнечелюстная / Plates Maxillary

Пластина верхнечелюстная переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 0,6 мм / Plates Maxillary Adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes: 20, length 118 mm, thickness 0.6 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
118±3	0,5 ± 0,25	3,7 ± 0,25	20	T=0.98±20% S=1.71±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина верхнечелюстная переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 0,8 мм / Plates Maxillary Adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes: 20, length 118 mm, thickness 0.8 mm mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
118±3	0,7 ± 0,25	3.9 ± 0,25	20	T=0.98±20% S=1.71±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина верхнечелюстная переходная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 1,0 мм / Plates Maxillary Adaption JZQ 03, size 2.0 mm, holes: 20, length 118 mm (thickness 1.0 mm)

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
118±3	0.8 ± 0,25	4 ± 0,25	20	T=1.7±20% S=2.95±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 2 -10 мм с шагом 2 мм, отверстия: 5+3
/ Plates Maxillary JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 2-10 mm increments 2 mm, holes 5+3

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
21±3	0,8± 0,25	4 ± 0,25	5+3	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plates Maxillary JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 2 mm, holes 5+3	Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 2 мм, отверстия: 5+3	2	T=0.4±20% S=0.7±20%
Plates Maxillary JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 4 mm, holes 5+3	Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 4 мм, отверстия: 5+3	4	T=0.42±20% S=0.72±20%
Plates Maxillary JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 6 mm, holes 5+3	Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 6 мм, отверстия: 5+3	6	T=0.44±20% S=0.75±20%
Plates Maxillary JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 8 mm, holes 5+3	Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 8 мм, отверстия: 5+3	8	T=0.46±20% S=0.8±20%
Plates Maxillary JZQ 03, Pre-bent, right/left, size 2.0 mm, length: 10 mm, holes 5+3	Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 10 мм, отверстия: 5+3	10	T=0.48±20% S=0.82±20%

Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 4 – 10 мм с шагом 2 мм / Plate Chin JZQ 03, size 2.0, with Double-Curved, holes 5, length 4 – 10 mm increments 2 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
24,3±3	0,7 ± 0,25	14,1 ± 0,25	5	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0, T, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Chin JZQ 03, size 2.0, with Double-Curved, holes 5, length 4 mm	Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 4 мм	4	T=0.98±20% S=1.85±20%
Plate Chin JZQ 03, size 2.0, with Double-Curved, holes 5, length 6 mm	Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 6 мм	6	T=1±20% S=1.89±20%
Plate Chin JZQ 03, size 2.0, with Double-Curved, holes 5, length 8 mm	Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 8 мм	8	T=1.02±20% S=1.93±20%
Plate Chin JZQ 03, size 2.0, with Double-Curved, holes 5, length 10 mm	Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 10 мм	10	T=1.04±20% S=1.97±20%

Пластина с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстия 4, длина 33, 40 мм / SplitFix Plates JZQ 03 size 2.0, holes 4, length 33, 40 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
0,7 ± 0,25	7 ± 0,25	4	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L=3, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
SplitFix Plates JZQ 03 size 2.0, holes 4, length 33 mm	Пластина с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстия 4, длина 33 мм	33	T=0.52±20% S=0.97±20%
SplitFix Plates JZQ 03 size 2.0, holes 4, length 40 mm	Пластина с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстия 4, длина 40 мм	40	T=0.63±20% S=1.1±20%

Пластина для подбородка с отдельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстий 1 / Plates Slider for SplitFix JZQ 03 size 2.0, holes 1

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
9±1	1,6 ± 0,25	4,5 ± 0,25	1	T=0.29±20% S=0.51±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина сагиттальная раздельная / Plates Sagittal Split

Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 6 -12 мм с шагом 2 мм, отверстия: 6 / Plates Sagittal Split JZQ 03, Curved, size 2.0, length: 6 -12 mm increments 2 mm, holes: 6

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, μm, outside/inner/others
1 ± 0,25	10,6 ± 0,25	6	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм / Plate length with tolerance, mm ± mm	L ± 0,1, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plates Sagittal Split JZQ 03, Curved, size 2.0, length: 6 mm, holes: 6	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 6 мм, отверстия: 6	24.9±3	6	T=0.3±20% S=0.54±20%
Plates Sagittal Split JZQ 03, Curved, size 2.0, length: 8 mm, holes: 6	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 8 мм, отверстия: 6	26.9±3	8	T=0.32±20% S=0.58±20%
Plates Sagittal Split JZQ 03, Curved, size 2.0, length: 10 mm, holes: 6	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 10 мм, отверстия: 6	28.9±3	10	T=0.34±20% S=0.62±20%
Plates Sagittal Split JZQ 03, Curved, size 2.0, length: 12 mm, holes: 6	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 12 мм, отверстия: 6	30.9±3	12	T=0.36±20% S=0.64±20%

Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 6 -12 мм с шагом 2 мм, отверстия: 4 / Plates Sagittal Split JZQ 03, Straight, size 2.0, length: 6 -12 mm increments 2 mm, holes: 4

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, μm, outside/inner/others
1 ± 0,25	2,6 ± 0,25	4	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм Plate length with tolerance, mm ± mm	l ± 0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plates Sagittal Split JZQ 03, Straight, size 2.0, length: 6 mm, holes: 4	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 6 мм, отверстия: 4	24.7±3	6	T=0.28±20% S=0.5±20%
Plates Sagittal Split JZQ 03, Straight, size 2.0, length: 8 mm, holes: 4	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 8 мм, отверстия: 4	26.7±3	8	T=0.3±20% S=0.54±20%
Plates Sagittal Split JZQ 03, Straight, size 2.0, length: 10 mm, holes: 4	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 10 мм, отверстия: 4	28.7±3	10	T=0.32±20% S=0.58±20%
Plates Sagittal Split JZQ 03, Straight, size 2.0, length: 12 mm, holes: 4	Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 12 мм, отверстия: 4	30.7±3	12	T=0.34±20% S=0.62±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости / Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости медиальная JZQ 01, размер 4,5 мм, отверстий 4, длина 115 мм / Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy Medial JZQ 01 size 4.5 mm, holes 4, length: 115 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
115±1	3,5 ± 0,25	16 ± 0,25	4	T=28.6±20% S=50±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости медиальная JZQ 01, малая, размер 4,5 мм, отверстий 4, длина 112 мм / Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy Medial JZQ 01 small, size 4.5 mm, holes 4, length: 112 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
112±1	3,5 ± 0,25	14 ± 0,25	4	T=24.75±20% S=42.39±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 3, 4 / Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 3, 4

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Roughness, µm, outside/inner/others
5 ± 0,25	16,3 ± 0,25	4	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Л±Л, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 3, 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 3, 4	102	3	T=37±20% S=64±20%
Plate Locking compression (LCP) for High Tibia Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 4	120	4	T=43.6±20% S=76±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости медиальная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий 4, 5/ Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Medial JZQ 01 right/left, size 4.5 mm, holes 4, 5

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Т±t, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Medial JZQ 01 right/left, size 4.5 mm, holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости медиальная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий 4	118	4	T=33.3±20% S=58±20%
Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Medial JZQ 01 right/left, size 4.5 mm, holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости медиальная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий 5	138	5	T=38.7±20% S=67.5±20%

Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 4, 5, 6/ Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 4, 5, 6

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	16 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±l, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 4	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 4	145,2	4	T=58.5±20% S=102±20%
Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 5	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 5	162,5	5	T=67.5±20% S=117.75±20%
Plate Locking compression (LCP) for Distal Femur Osteotomy Lateral JZQ 01, right/left, size 4.5 mm, holes 6	Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 6	182,5	6	T=76.5±20% S=133.45±20%

Пластина L-образная фиксирующая / L-Plate, Locking

Пластина L-образная фиксирующая динамическая компрессионная YSQ 13, правая/левая, размер 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстия x длина: 5x27,5 мм, 7x36,5 мм, 9x45,5 мм / L-Plate, Locking Dynamic Compression YSQ 13, right/left, size 1.5 mm, head with two holes, holes: 5x27.5 mm, 7x36.5 mm, 9x45.5 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L+I, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate, Locking Dynamic Compression YSQ 13, right/left, size 1.5 mm, head with two holes, holes: 5x27.5 mm	Пластина L-образная фиксирующая динамическая компрессионная YSQ 13, правая/левая, размер 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстия x длина: 5x27,5 мм	27,5	5	T=0.65±20% S=1.13±20%
L-Plate, Locking Dynamic Compression YSQ 13, right/left, size 1.5 mm, head with two holes, holes: 7x36.5 mm	Пластина L-образная фиксирующая динамическая компрессионная YSQ 13, правая/левая, размер 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстия x длина: 7x36,5 мм	36,5	7	T=0.86±20% S=1.51±20%
L-Plate, Locking Dynamic Compression YSQ 13, right/left, size 1.5 mm, head with two holes, holes: 9x45.5 mm	Пластина L-образная фиксирующая динамическая компрессионная YSQ 13, правая/левая, размер 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстия x длина: 9x45,5 мм	45,5	9	T=1.08±20% S=1.88±20%

Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм / L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 1.5 mm, head with two holes, holes: 5-8 mm increments 1 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 1.5 mm, head with two holes, holes: 5 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5 мм	26	5	T=0.56±20% S=0.98±20%
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 1.5 mm, head with two holes, holes: 6 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 6 мм	31	6	T=0.67±20% S=1.17±20%
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 1.5 mm, head with two holes, holes: 7 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 7 мм	36	7	T=0.78±20% S=1.36±20%
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 1.5 mm, head with two holes, holes: 8 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 8 мм	41	8	T=0.89±20% S=1.54±20%

Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм / L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.0 mm, head with two holes, holes: 5-8 mm increments 1 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,2 ± 0,25	5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2




Description	Описание	L±L, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.0 mm, head with two holes, holes : 5 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия : 5 мм	39	5	T=1.05±20% S=1.83±20%
-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.0 mm, head with two holes, holes : 6 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия : 6 мм	46	6	T=1.24±20% S=2.17±20%
-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.0 mm, head with two holes, holes : 7 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия : 7 мм	53	7	T=1.43±20% S=2.49±20%
-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.0 mm, head with two holes, holes : 8 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия : 8 мм	60	8	T=1.62±20% S=2.82±20%

Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм / L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.4 mm, head with two holes, holes: 5-8 mm increments 1 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Л±2, мм (mm)	Отверстий (Holes): шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.4 mm, head with two holes, holes: 5 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5 мм	46	5	T=1.86±20% S=3.25±20%
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.4 mm, head with two holes, holes: 6 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 6 мм	54	6	T=2.19±20% S=3.81±20%
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.4 mm, head with two holes, holes: 7 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 7 мм	62	7	T=2.51±20% S=4.38±20%
L-Plate, Locking JZQ 02, right/left, size: 2.4 mm, head with two holes, holes: 8 mm	Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 8 мм	70	8	T=2.83±20% S=4.94±20%

Пластина L-образная фиксирующая детская YSQ 19, правая/левая, размер: 3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7 / L-Plate, Locking Pediatric YSQ 19, right/left, size: 3.5 mm, holes: 3, 5, 7

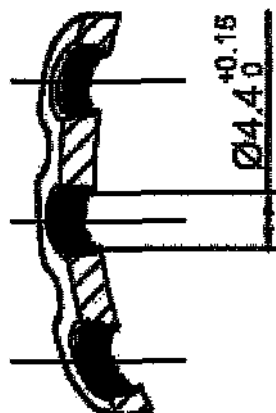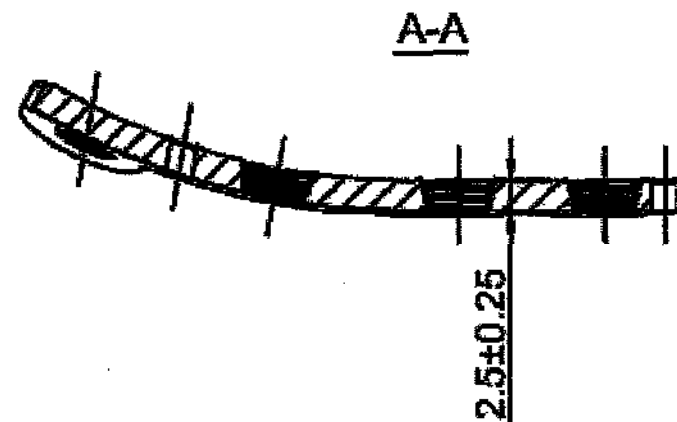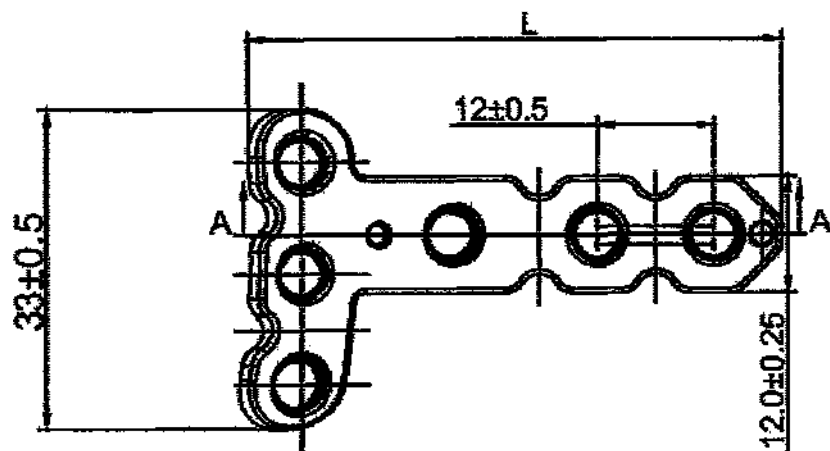

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate head width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	10 ± 0,25	33 ± 0,5	12 ± 0,5	4,4 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate, Locking Pediatric YSQ 19, right/left, size: 3.5 mm, holes: 3	Пластина L-образная фиксирующая детская YSQ 19, правая/левая, размер: 3,5 мм, отверстия: 3	54	3	T=4.86±20% S=8.48±20%
L-Plate, Locking Pediatric YSQ 19, right/left, size: 3.5 mm, holes: 5	Пластина L-образная фиксирующая детская YSQ 19, правая/левая, размер: 3,5 мм, отверстия: 5	78	5	T=7.02±20% S=12.25±20%
L-Plate, Locking Pediatric YSQ 19, right/left, size: 3.5 mm, holes: 7	Пластина L-образная фиксирующая детская YSQ 19, правая/левая, размер: 3,5 мм, отверстия: 7	102	7	T=9.18±20% S=16.01±20%

Черепной лоскут NIAGARA JZQ 04, длина: 11 мм, 13 мм, 18 мм, 22 мм / Cranial Flap NIAGARA JZQ 04, length: 11 mm, 13 mm, 18 mm, 22 mm

Description	Описание	Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm / Plate width with tolerance, mm ± mm	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие Roughness, µm, outside/inner/others	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Cranial Flap NIAGARA JZQ 04, length: 11 mm	Черепной лоскут NIAGARA JZQ 04, длина: 11 мм	11 ± 0,25	11	0,8 1,6 3,2	T=1.1±20%
Cranial Flap NIAGARA JZQ 04, length: 13 mm	Черепной лоскут NIAGARA JZQ 04, длина: 13 мм	13 ± 0,25	13	0,8 1,6 3,2	T=1.3±20%
Cranial Flap NIAGARA JZQ 04, length: 18 mm	Черепной лоскут NIAGARA JZQ 04, длина: 18 мм	18 ± 0,25	18	0,8 1,6 3,2	T=1.8±20%
Cranial Flap NIAGARA JZQ 04, length: 22 mm	Черепной лоскут NIAGARA JZQ 04, длина: 22 мм	22 ± 0,25	22	0,8 1,6 3,2	T=2.4±20%

Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) / Plate LC-DCP

Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 51 мм, 5 x 64 мм, 6 x 77 мм, 7 x 90 мм, 8 x 103 мм, 9 x 116 мм, 10 x 129 мм, 11 x 142 мм, 12 x 155 мм, 14 x 168 мм, 16 x 181 мм, 18 x 194 мм, 20 x 207 мм / Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 4 x 51 mm, 5 x 64 mm, 6 x 77 mm, 7 x 90 mm, 8 x 103 mm, 9 x 116 mm, 10 x 129 mm, 11 x 142 mm, 12 x 155 mm, 14 x 168 mm, 16 x 181 mm, 18 x 194 mm, 20 x 207 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 4 x 51 mm,	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 51 мм	51	4	T=8.83±20% S=15.3±20%
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 5 x 64 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 5 x 64 мм	64	5	T=11.09±20% S=19.3±20%
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 6 x 77 mm,	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 6 x 77 мм	77	6	T=13.34±20% S=23.1±20%
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 7 x 90 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 7 x 90 мм	90	7	T=15.6±20% S=27±20%
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 8 x 103 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 8 x 103 мм	103	8	T=17.84±20% S=30.9±20%
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length 9 x 116 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина 9 x 116 мм	116	9	T=20.1±20% S=34.8±20%

Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 10 x 129 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина 10 x 129 мм	129	10	$T=22.34\pm20\%$ $S=38.7\pm20\%$
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 11 x 142 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 11 x 142 мм	142	11	$T=24.6\pm20\%$ $S=42.6\pm20\%$
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 12 x 155 mm,	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 12 x 155 мм,	155	12	$T=26.85\pm20\%$ $S=46.3\pm20\%$
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 14 x 168 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина 14 x 168 мм	168	14	$T=29.34\pm20\%$ $S=50.4\pm20\%$
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 16 x 181 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина 16 x 181 мм	181	16	$T=31.35\pm20\%$ $S=54.3\pm20\%$
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 18 x 194 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 18 x 194 мм	194	18	$T=33.61\pm20\%$ $S=58.3\pm20\%$
Plate LC-DCP YSQ 13, size 3.5 mm, holes x length: 20 x 207 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина 20 x 207 мм	207	20	$T=35.86\pm20\%$ $S=62.3\pm20\%$

Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 69 мм, 5 x 87 мм, 6 x 105 мм, 7 x 123 мм, 8 x 141 мм, 9 x 159 мм, 10 x 177 мм, 11 x 195 мм, 12 x 213 мм, 14 x 231 мм, 16 x 249 мм, 18 x 267 мм, 20 x 285 мм / Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 4 x 69 mm, 5 x 87 mm, 6 x 105 mm, 7 x 123 mm, 8 x 141 mm, 9 x 159 mm, 10 x 177 mm, 11 x 195 mm, 12 x 213 mm, 14 x 231 mm, 16 x 249 mm, 18 x 267 mm, 20 x 285 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
6 ± 0,25	15 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 4 x 69 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 69 мм	69	4	T=27.95±20% S=48.74±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 5 x 87 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 5 x 87 мм	87	5	T=35.23±20% S=61.46±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 6 x 105 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 6 x 105 мм,	105	6	T=42.52±20% S=74.18±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 7 x 123 mm,	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 7 x 123 мм	123	7	T=49.34±20% S=86.89±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 8 x 141 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 8 x 141 мм	141	8	T=57.1±20% S=99.61±20%

Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 9 x 159 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина 9 x 159 мм	159	9	T=64.4±20% S=112.3±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 10 x 177 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 10 x 177 мм	177	10	T=71.69±20% S=125.1±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 11 x 195 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 11 x 195 мм	195	11	T=78.98±20% S=137.7±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 12 x 213 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12 x 213 мм	213	12	T=86.26±20% S=150.5±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 14 x 231 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 14 x 231 мм	231	14	T=93.55±20% S=163.2±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length 16 x 249 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина 16 x 249 мм	249	16	T=100.8±20% S=175.9±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 18 x 267 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 18 x 267 мм	267	18	T=108.1±20% S=188.6±20%
Plate LC-DCP Narrow, YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 20 x 285 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 20 x 285 мм	285	20	T=115.4±20% S=201.3±20%

Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 72 мм, 5 x 90 мм, 6 x 108 мм, 7 x 126 мм, 8 x 144 мм, 9 x 162 мм, 10 x 180 мм, 11 x 198 мм, 12 x 216 мм, 14 x 252 мм, 16 x 270 мм, 18 x 288 мм, 20 x 306 мм / Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 4 x 72 mm, 5 x 90 mm, 6 x 108 mm, 7 x 126 mm, 8 x 144 mm, 9 x 162 mm, 10 x 180 mm, 11 x 198 mm, 12 x 216 mm, 14 x 252 mm, 16 x 270 mm, 18 x 288 mm, 20 x 306 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	17,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 4 x 72 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 72 мм	72	4	T=34.02±20% S=59.32±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 5 x 90 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 5 x 90 мм	90	5	T=42.52±20% S=74.16±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 6 x 108 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 6 x 108 мм	108	6	T=51.03±20% S=88.9±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 7 x 126 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 7 x 126 мм	126	7	T=59.34±20% S=103.8±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 8 x 144 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая,	144	8	T=68.04±20% S=118.6±20%

	YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 8 x 144 мм			
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 9 x 162 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 9 x 162 мм	162	9	T=76.54±20% S=133.5±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 10 x 180 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 10 x 180 мм	180	10	T=85.05±20% S=148.3±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 11 x 198 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 11 x 198 мм	198	11	T=93.55±20% S=163.3±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 12 x 216 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12 x 216 мм	216	12	T=102±20% S=177.9±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 14 x 252 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 14 x 252 мм	252	14	T=119.04±20% S=207.6±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 16 x 270 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 16 x 270 мм	270	16	T=127.5±20% S=222.48±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 18 x 288 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 18 x 288 мм	288	18	T=136.04±20% S=237.3±20%
Plate LC-DCP Broad YSQ 13, size 4.5 mm, holes x length: 20 x 306 mm	Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 20 x 306 мм	306	20	T=144.5±20% S=252.14±20%

Пластина на одну треть трубчатой кости / Plate One-third Tubular

Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 49 мм, 5 x 61 мм, 6 x 73 мм, 7 x 85 мм, 8 x 97 мм, 9 x 109 мм, 10 x 121 мм / Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 4 x 49 mm, 5 x 61 mm, 6 x 73 mm, 7 x 85 mm, 8 x 97 mm, 9 x 109 mm, 10 x 121 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 4 x 49 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 49 мм	49	4	T=4.85±20% S=8.46±20%
Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 5 x 61 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 5 x 61 мм	61	5	T=6±20% S=10.53±20%
Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 6 x 73 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 6 x 73 мм	73	6	T=7.22±20% S=12.6±20%
Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 7 x 85 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 7 x 85 мм	85	7	T=8.42±20% S=14.68±20%
Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 8 x 97 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 8 x 97 мм	97	8	T=9.6±20% S=16.75±20%
Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 9 x 109 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 9 x 109 мм	109	9	T=10.78±20% S=18.82±20%

Plate One-third Tubular ZSQ 01, size 3.5 mm, holes x length: 10 x 121 mm	Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 10 x 121 мм	121	10	T=11.98±20% S=20.89±20%
--	--	-----	----	----------------------------


Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 3-14 с шагом 1 / Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 3-14 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 3	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 3	37	3	T=3±20% S=5±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 4	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 4	49	4	T=4±20% S=7±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 5	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 5	61	5	T=5±20% S=9±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 6	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 6	73	6	T=6±20% S=11±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 7	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 7	85	7	T=7±20% S=12±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 8	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 8	97	8	T=8±20% S=14±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 9	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 9	109	9	T=9±20% S=16±20%

Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 10	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 10	121	10	T=10±20% S=18±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 11	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 11	145	11	T=12.5±20% S=22±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 12	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 12	157	12	T=13.5±20% S=24±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 13	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 13	169	13	T=14.5±20% S=26±20%
Plate One-third Tubular Locking ZSQ 09, size 3.5 mm, holes: 14	Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм, отверстия: 14	181	14	T=15.5±20% S=28±20%

Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 6, 7, 8, 10, 12 / Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 6, 7, 8, 10, 12

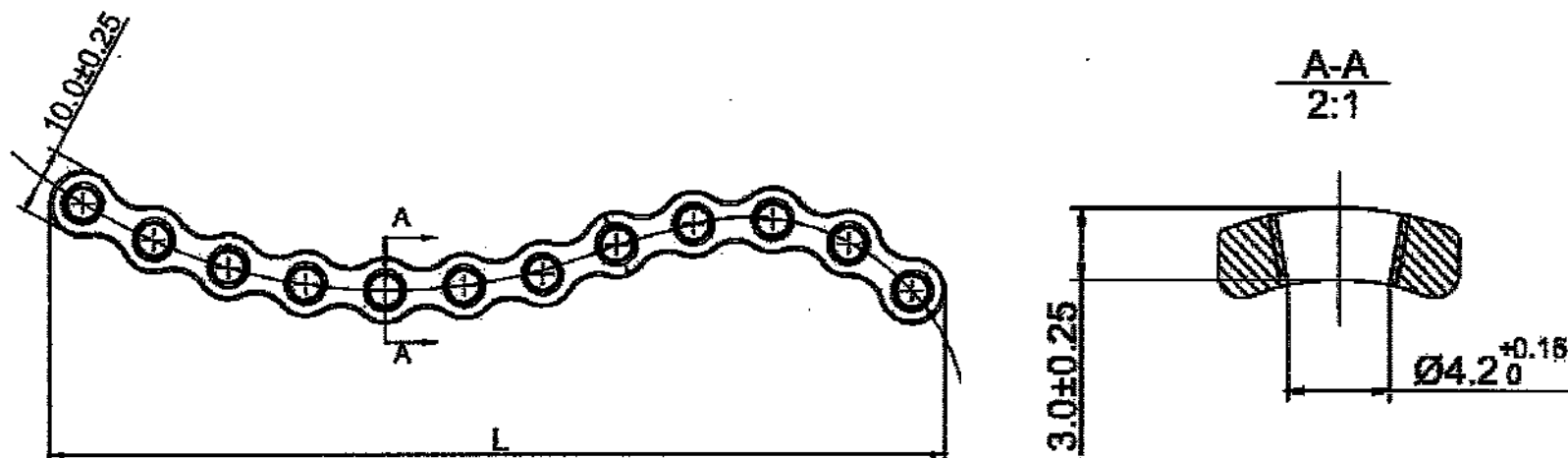


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
3 ± 0,25	10 ± 0,25	4,2 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 6	Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 6	67	6	T=9.05±20% S=15.78±20%
Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 7	Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 7	78	7	T=10.53±20% S=18.38±20%
Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 8	Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 8	90	8	T=12.15±20% S=21.19±20%
Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 10	Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 10	112	10	T=15.12±20% S=26.38±20%
Plate Reconstruction Locking S-shape YSQ 16, size 3.5 mm, right/left, holes: 12	Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 12	134	12	T=18.09±20% S=31.56±20%

Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) / L-Plate Distal Locking compression (LCP)


Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4 / L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, oblique, head with three holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3, 4

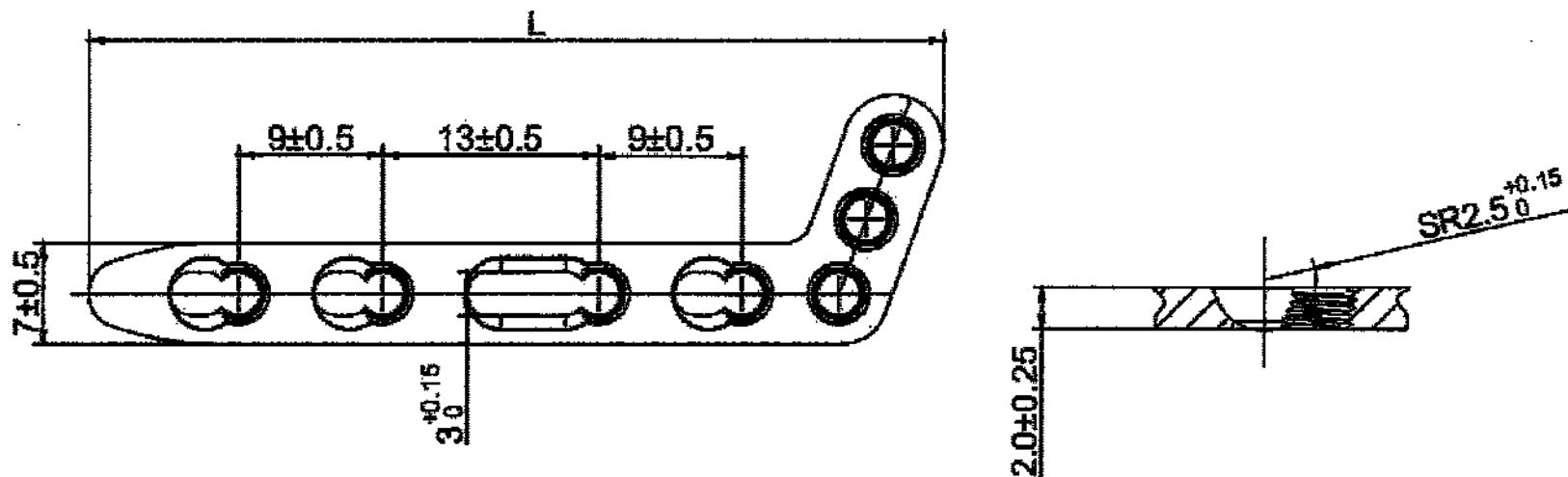

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояния между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	9 ± 0,5 13 ± 0,5	7 ± 0,5	3 ^{+0,15} ₀	2,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, oblique, head with three holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3	43	3	T=2.71±20% S=4.73±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, oblique, head with three holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 4	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 4	52	4	T=3.28±20% S=5.71±20%


Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4, 5 / L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3, 4, 5

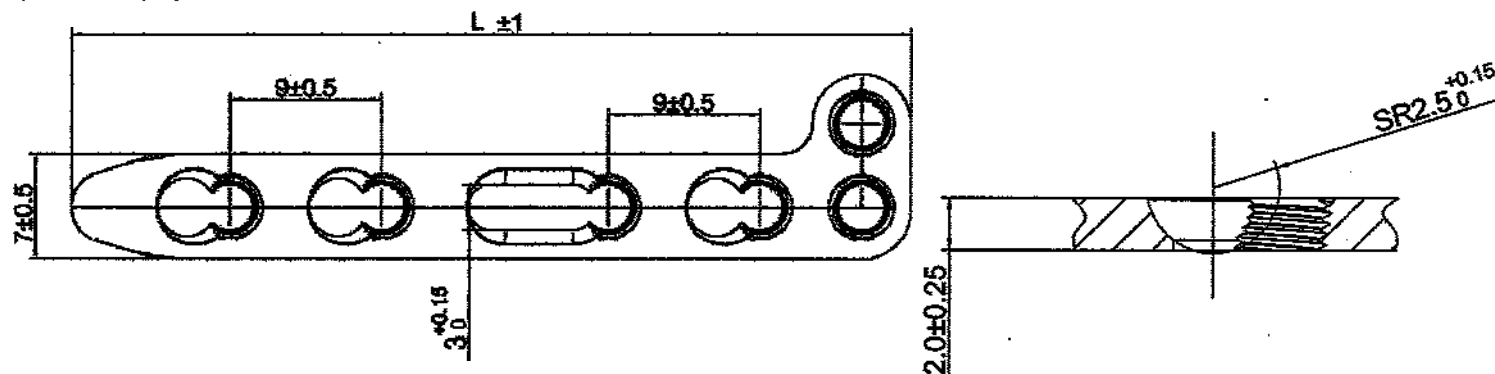

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, outside/inner/others
2 ± 0,25	7 ± 0,5	3 ₀ ^{+0,15}	9 ± 0,5	2,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, mm (mm)	Отверстия (Holes), шт	Масса с погрешностями, g ± g / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3	40	3	T=2.52±20% S=4.4±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 4	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 4,	49	4	T=3.09±20% S=5.39±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 5	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 5	58	5	T=3.65±20% S=6.37±20%


Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4, 5 / L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 3 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3, 4, 5

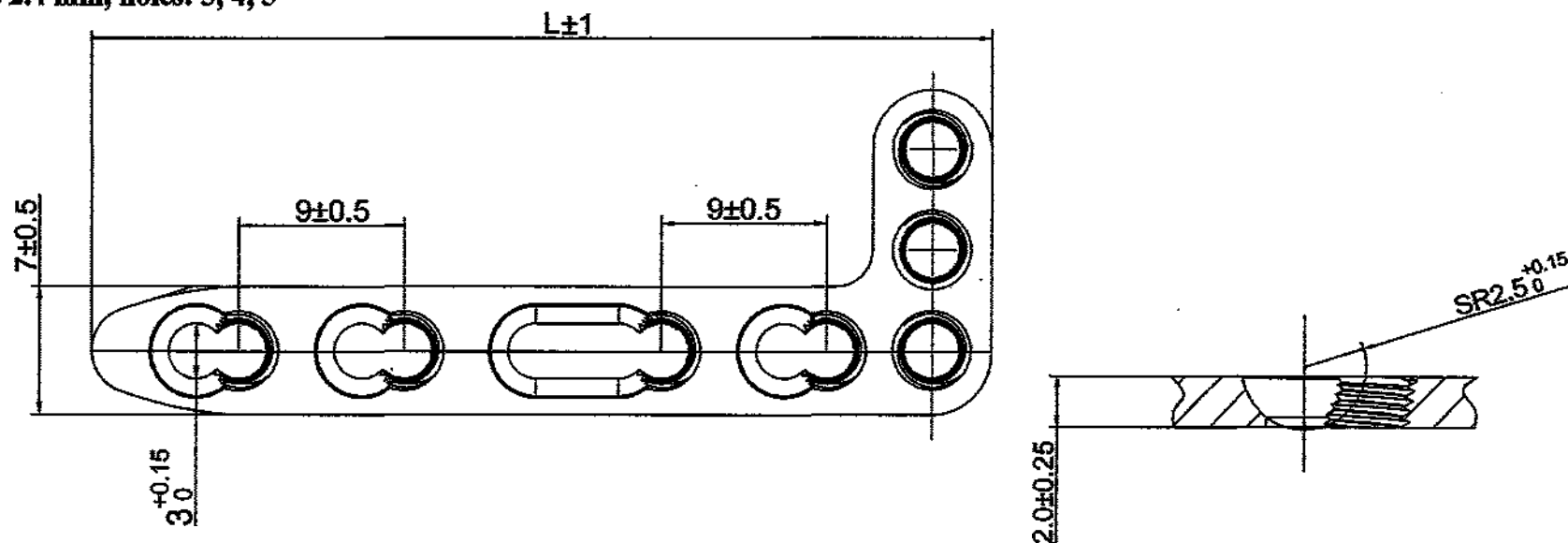

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	7 ± 0,5	3 ₀ ^{+0,15}	9 ± 0,5	2,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 3	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3	40	3	T=2.52±20% S=4.4±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 4	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 4,	49	4	T=3.09±20% S=5.39±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) Dorsal Radius, right angle, head with 2 holes YSQ 12, right/left, size 2.4 mm, holes: 5	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 5	58	5	T=3.65±20% S=6.37±20%

Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1 / L-Plate Distal
 Locking compression (LCP) YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 4-8 increments 1

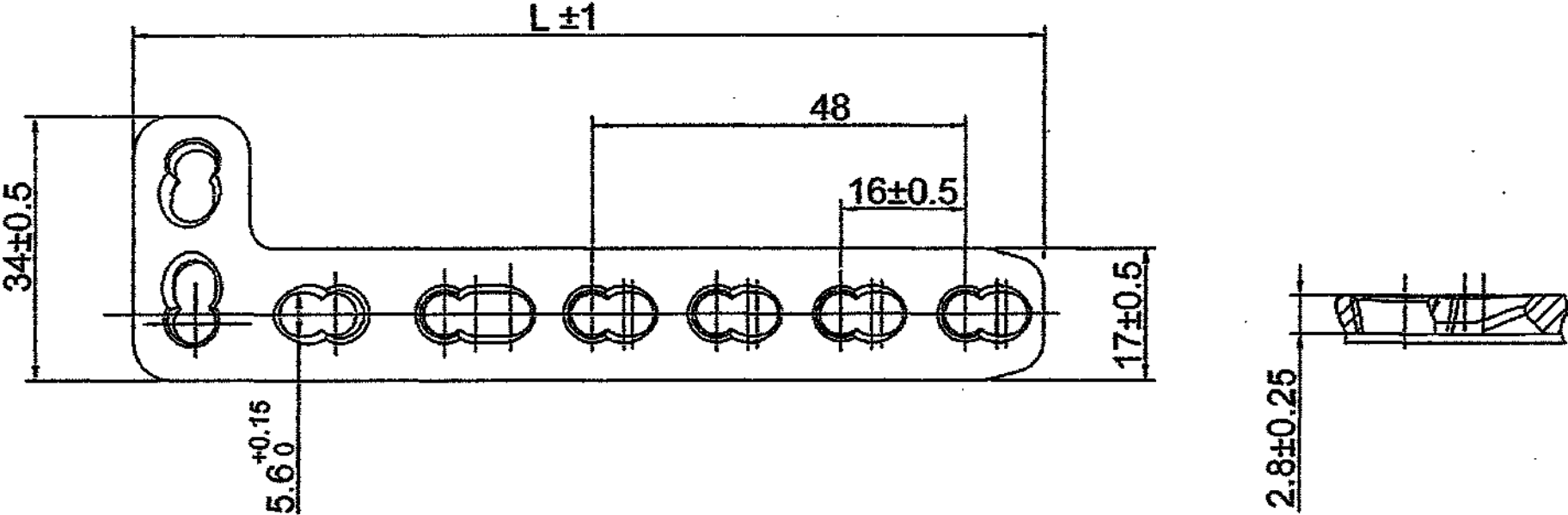

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояния между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2,8± 0,25	16 ± 0,5 48 ± 0,5	17 ± 0,5 34±0,5	5,6 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
L-Plate Distal Locking compression (LCP) YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 4	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4	85	4	T=18.21±20% S=31.76±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 5	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 5	93	5	T=19.92±20% S=34.75±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 6	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6	101	6	T=21.63±20% S=37.74±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 7	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 7	109	7	T=23.35±20% S=40.73±20%
L-Plate Distal Locking compression (LCP) YSQ 12, right/left, size 4.5 mm, holes: 8	Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 8	117	8	T=25.06±20% S=43.72±20%

Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 4-16 с шагом 1 / Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 4-16 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6±0,25	16±0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L ₁ мм (mm)	Отверстия (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 4	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 4	82	4	T=35.42±20% S=61.79±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 5	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 5	98	5	T=42.33±20% S=73.85±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 6	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 6	114	6	T=49.24±20% S=85.91±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 7	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 7	130	7	T=56.16±20% S=97.96±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 8	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 8	146	8	T=63.07±20% S=110.03±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 9	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 9	162	9	T=69.98±20% S=122.1±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 10	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 10	178	10	T=76.89±20% S=134.14±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 11	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 11	194	11	T=83.8±20% S=146.2±20%

Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 12	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 12	210	12	T=90.72±20% S=158.26±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 13	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 13	226	13	T=97.63±20% S=170.31±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 14	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 14	242	14	T=104.54±20% S=182.37±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 15	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 15	258	15	T=111.45±20% S=194.43±20%
Plate for DCS 95° YSQ 36, holes: 16	Пластина под динамический мышелковый винт 95° YSQ 36, отверстия: 16	274	16	T=118.37±20% S=206.49±20%

Пластина фиксирующая с переменным углом / Plate Locking with VA


Пластина фиксирующая с переменным углом С-образная для сращивания ZSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 27 мм / Plate Locking with VA C-Fusion ZSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 27 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
27±1	2,5 ± 0,5	1 ± 0,25	2	T=0.3±20% S=0.49±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая с переменным углом прямая для сращивания ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4 x 40 мм / Plate Locking with VA Straight Fusion, ZSQ 03, size 2.7 mm, holes x length: 4 x 40 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
40±1	2,5 ± 0,5	1 ± 0,25	4	T=0.42±20% S=0.73±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фиксирующая с переменным углом L-образная для сращивания YSQ 20, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 44 мм, 4 x 62 мм / Plate Locking with VA L-Fusion YSQ 20, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 44 mm, 4 x 62 mm

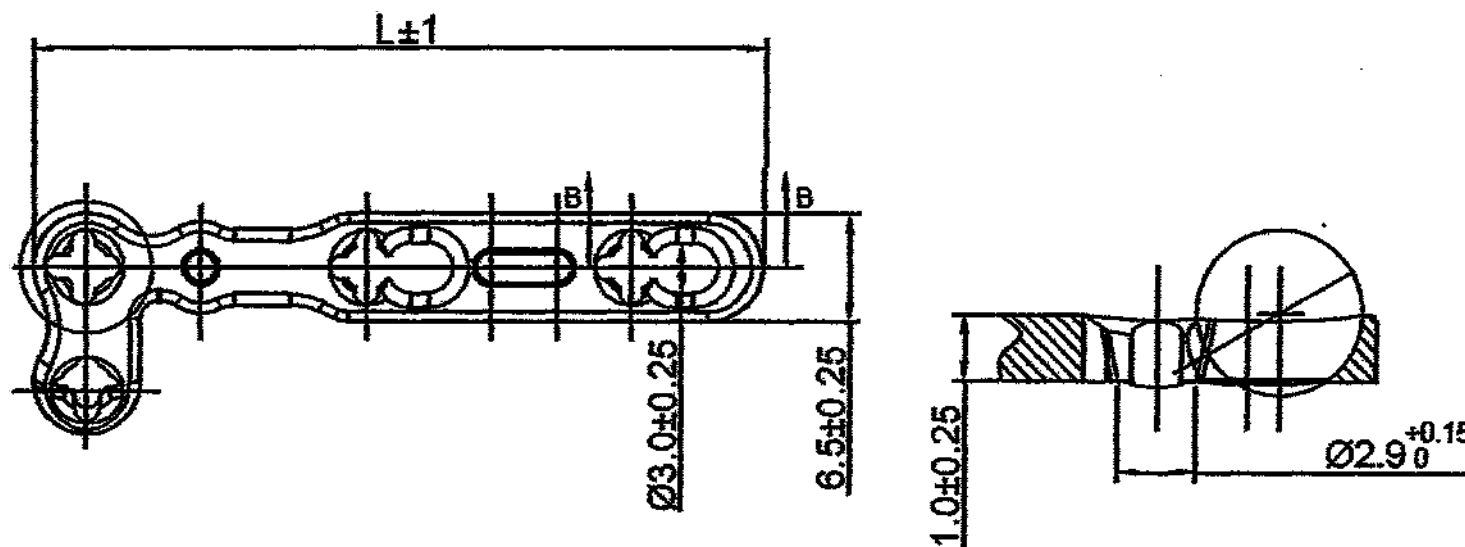

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1 ± 0,25	6,5 ± 0,25	3 ± 0,25	2,9 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ±1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking with VA L-Fusion YSQ 20, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 44 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом L-образная для сращивания YSQ 20, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 44 мм	44	2	T=2.57±20% S=4.49±20%
Plate Locking with VA L-Fusion YSQ 20, right/left, size 2.7 mm, holes x length: 4 x 62 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом L-образная для сращивания YSQ 20, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4 x 62мм	62	4	T=3.63±20% S=6.33±20%

Пластина фиксирующая с переменным углом Т-образная, YSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 42 мм, 4 x 60 мм, 7 x 92 мм / Plate Locking with VA T-Fusion YSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 42 mm, 4 x 60 mm, 7 x 92 mm

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1 ± 0,25	2,5 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking with VA T-Fusion YSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 42 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом Т-образная, YSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 42 мм	42	2	T=0.44±20% S=0.77±20%
Plate Locking with VA T-Fusion YSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 4 x 60 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом Т-образная, YSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4 x 60 мм	60	4	T=0.63±20% S=1.1±20%
Plate Locking with VA T-Fusion YSQ 01, size 2.7 mm, holes x length: 7 x 92 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом Т-образная, YSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 7 x 92 мм	92	7	T=0.97±20% S=1.69±20%


Пластина фиксирующая с переменным углом клеверообразная для срачивания YSQ 13, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 45 мм, 4 x 64 мм / Plate Locking with VA Cloverleaf for Fusion YSQ 13, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 45 mm, 4 x 64 mm

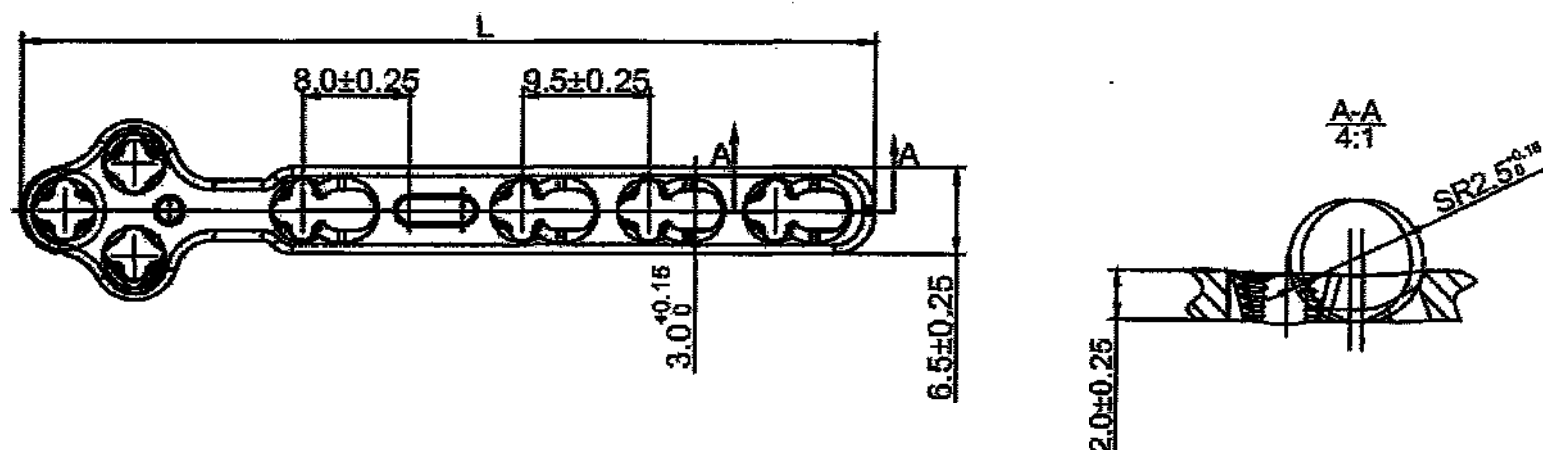

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
2 ± 0,25	8 ± 0,25 9,5 ± 0,25	6,5 ± 0,25	3 ^{+0,15} ₀	2,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking with VA Cloverleaf for Fusion YSQ 13, size 2.7 mm, holes x length: 2 x 45 mm, 4 x 64 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом клеверообразная для срачивания YSQ 13, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 45 мм, 4 x 64 мм	45	2	T=2.63±20% S=4.59±20%
Plate Locking with VA Cloverleaf for Fusion YSQ 13, size 2.7 mm, holes x length: 4 x 64 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом клеверообразная для срачивания YSQ 13, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4 x 64 мм	64	4	T=3.74±20% S=6.53±20%


Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов ZSQ 12, правая/левая, размер 2,7 мм, угол: 0°, 5°, 10°, длина: 42 мм / Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP ZSQ 12, right/left, size 2.7 mm, angles: 0°, 5°, 10°, length: 42 mm

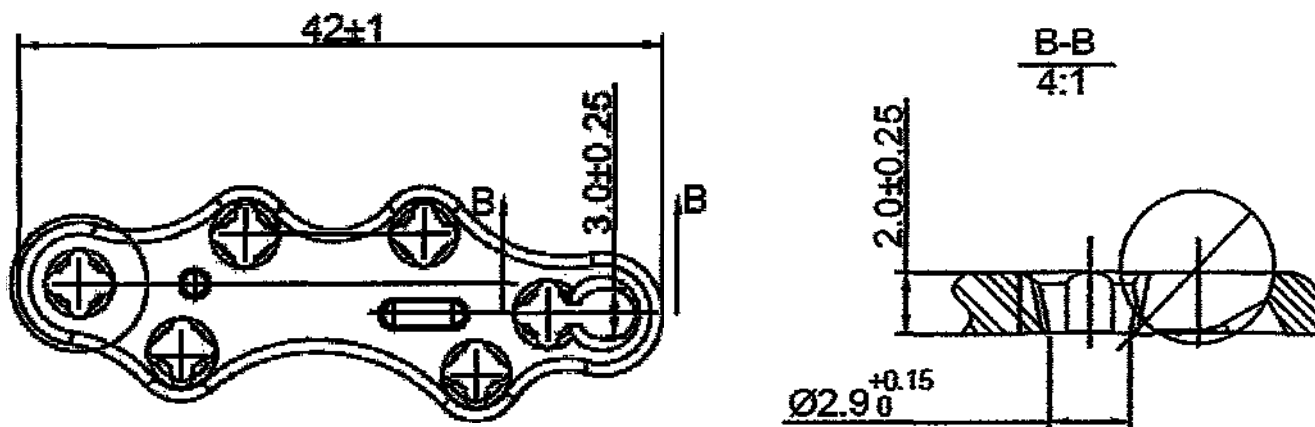

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2±0,25	42 ± 1	3 ^{+0,15} ₀	2,9 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Угол, ° / Angel, °	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP ZSQ 12, right/left, size 2.7 mm, angles: 0°	Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов ZSQ 12, правая/левая, размер 2,7 мм, угол: 0°	0	T=3.44±20% S=6±20%
Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP ZSQ 12, right/left, size 2.7 mm, angles: 5°	Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов ZSQ 12, правая/левая, размер 2,7 мм, угол: 5°	5	T=3.44±20% S=6±20%
Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP ZSQ 12, right/left, size 2.7 mm, angles: 10°	Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов ZSQ 12, правая/левая, размер 2,7 мм, угол: 10°	10	T=3.44±20% S=6±20%


Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пьестно-фланговых суставов YSQ 02, размер 2,7 мм, длина: длинная 48 мм, стандартная 39 мм / Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP YSQ 02 size 2.7 mm, length: long 48 mm, standard 39 mm

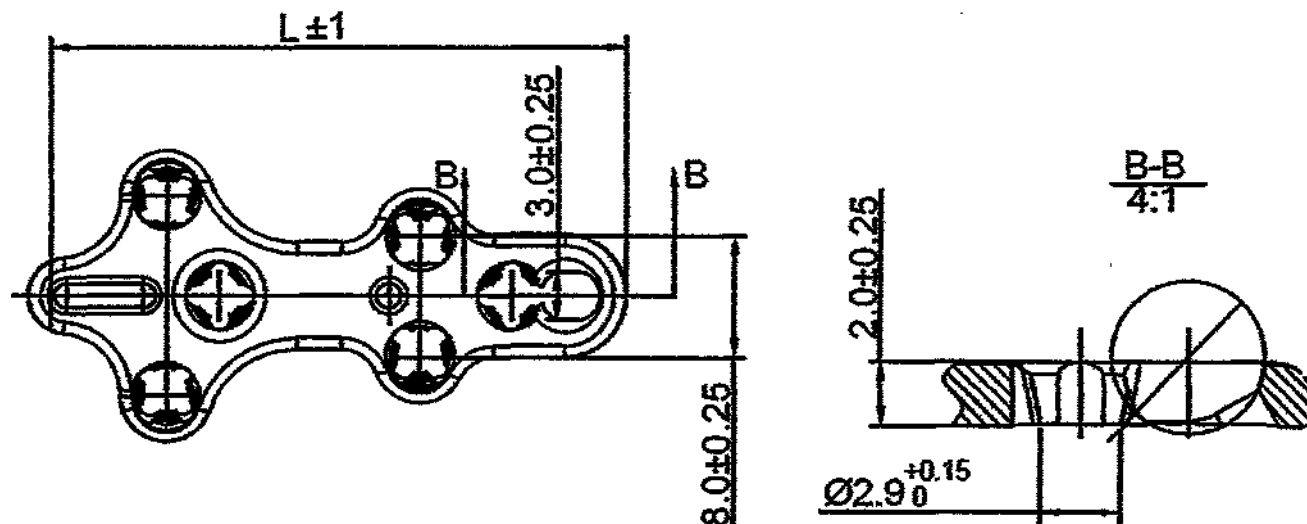

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
8 ± 0,25	2 ± 0,25	42 ± 1	3 ₀ ^{+0,15}	2,9 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP YSQ 02 size 2.7 mm, length: standard 39 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пьестно-фланговых суставов YSQ 02, размер 2,7 мм, длина: стандартная 39 мм	39	T=3.51±20% S=6.12±20%
Plate Locking with VA for Fusion 1st MTP YSQ 02 size 2.7 mm, length: long 48 mm	Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пьестно-фланговых суставов YSQ 02, размер 2,7 мм, длина: длинная 48 мм	48	T=4.32±20% S=7.54±20%


Пластина Н-образная YSQ 19 размер 1,5 мм, отверстий 11 / H-Plate YSQ 19 size 1.5 mm, holes 11

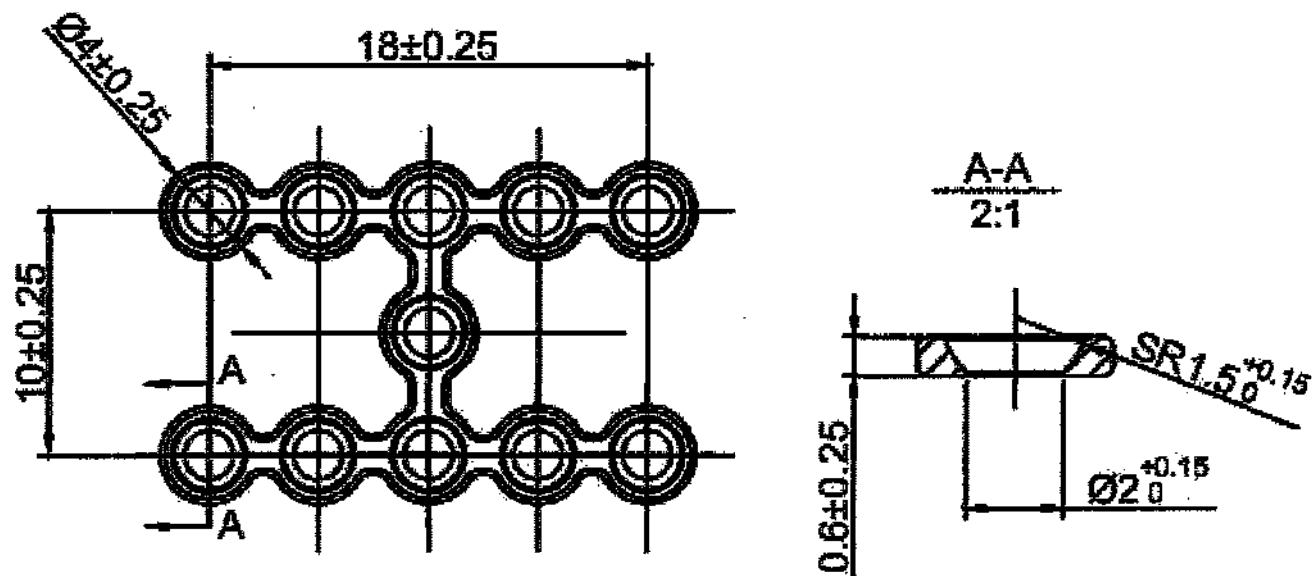

Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± mm	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± mm	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± mm	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г g ± g	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6 ± 0,25	4 ± 0,25	18 ± 0,25 10 ± 0,25	2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.83±20% S=1.45±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина глазничная / Plate Orbital


Пластина глазничная YSQ20, размер 1,5 мм, отверстия: 8, 10, 12 / Plate Orbital YSQ20 size 1.5 mm, holes: 8, 10, 12

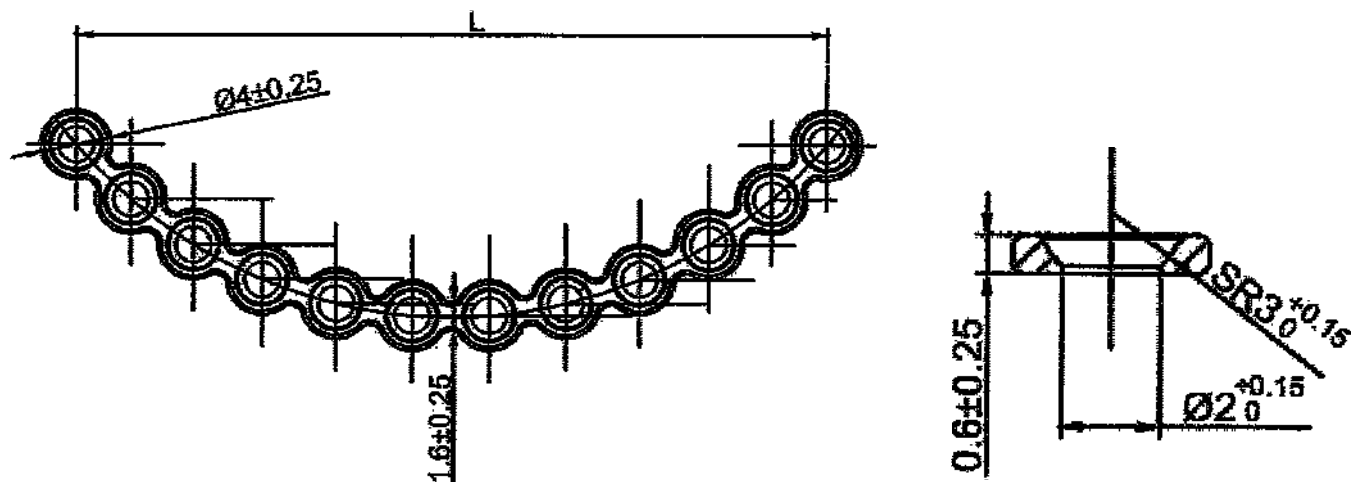

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
$0,6 \pm 0,25$	$4 \pm 0,25$	$1,6 \pm 0,25$	$2_0^{+0,15}$	$3_0^{+0,15}$	0,4 0,8 3,2


Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Orbital YSQ20 size 1.5 mm, holes: 8	Пластина глазничная YSQ20, размер 1,5 мм, отверстия: 8	35	8	T=0.37±20% S=0.65±20%
Plate Orbital YSQ20 size 1.5 mm, holes: 10	Пластина глазничная YSQ20, размер 1,5 мм, отверстия: 10	42	10	T=0.46±20% S=0.8±20%
Plate Orbital YSQ20 size 1.5 mm, holes: 12	Пластина глазничная YSQ20, размер 1,5 мм, отверстия: 12	49	12	T=0.55±20% S=0.95±20%

Пластина глазничная YSQ 20 изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 4, 5, 7 / Plate Orbital YSQ 20, curved, size 2.0 mm, holes: 4, 5, 7

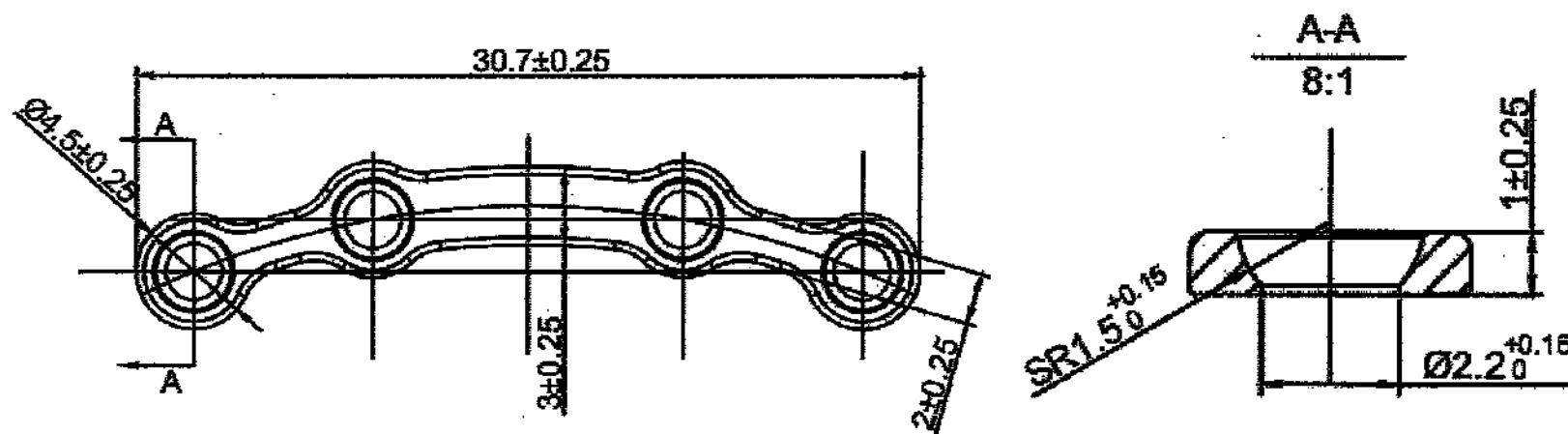


Пластина глазничная YSQ 20 изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 4

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
30,7±0,25	1± 0,25	4 ± 0,25	2 ± 0,25 3 ± 0,25	4	2,2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.63±20% S=1.1±20%	0,4 0,8 3,2

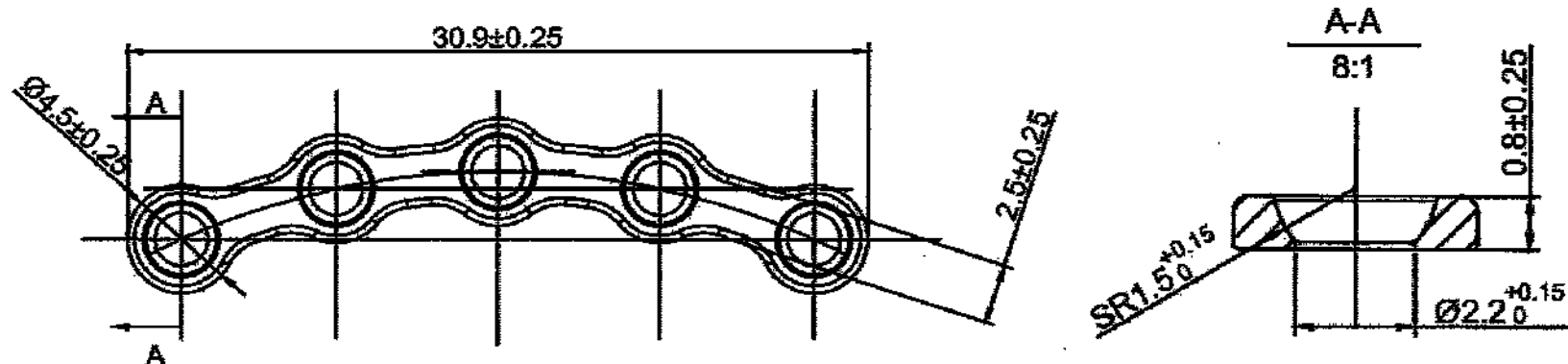

Пластина глазничная YSQ 20 изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 5


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
30,9±0,25	0,8± 0,25	4,5 ± 0,25	2,5 ± 0,25	5	2,2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.63±20% S=1.1±20%	0,4 0,8 3,2

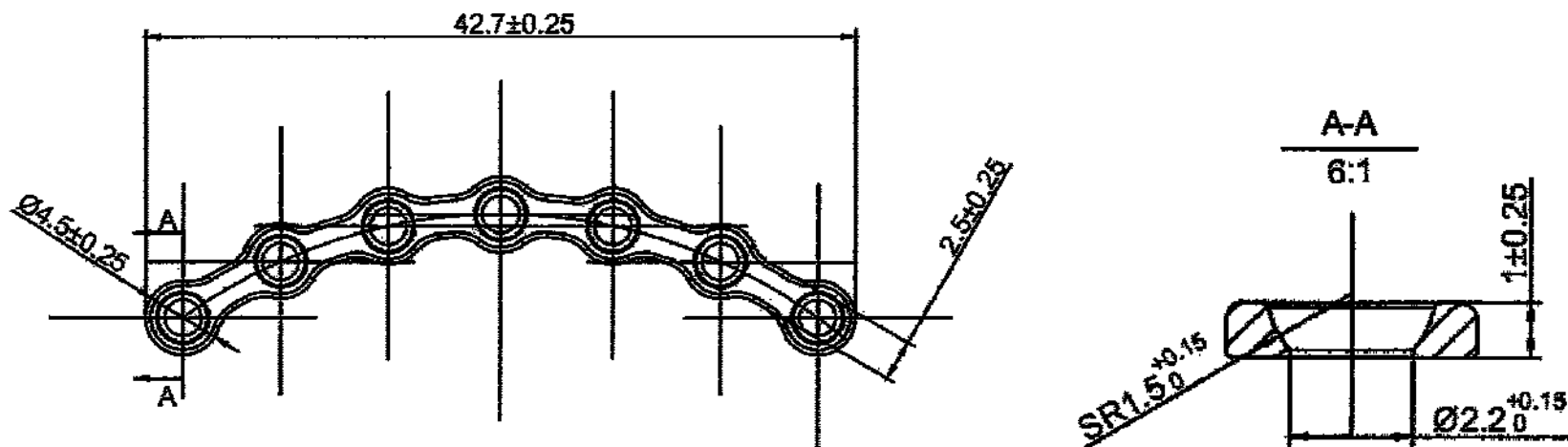

Пластина глазничная YSQ 20 изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 7

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
42,7±0,25	1±0,25	4,5 ± 0,25	2,5 ± 0,25	7	2,2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.85±20% S=1.48±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина для нижней стенки глазницы универсальная YSQ16, размер 1,5 мм / Plate for Orbital Floor Universal YSQ16, size 1.5 mm

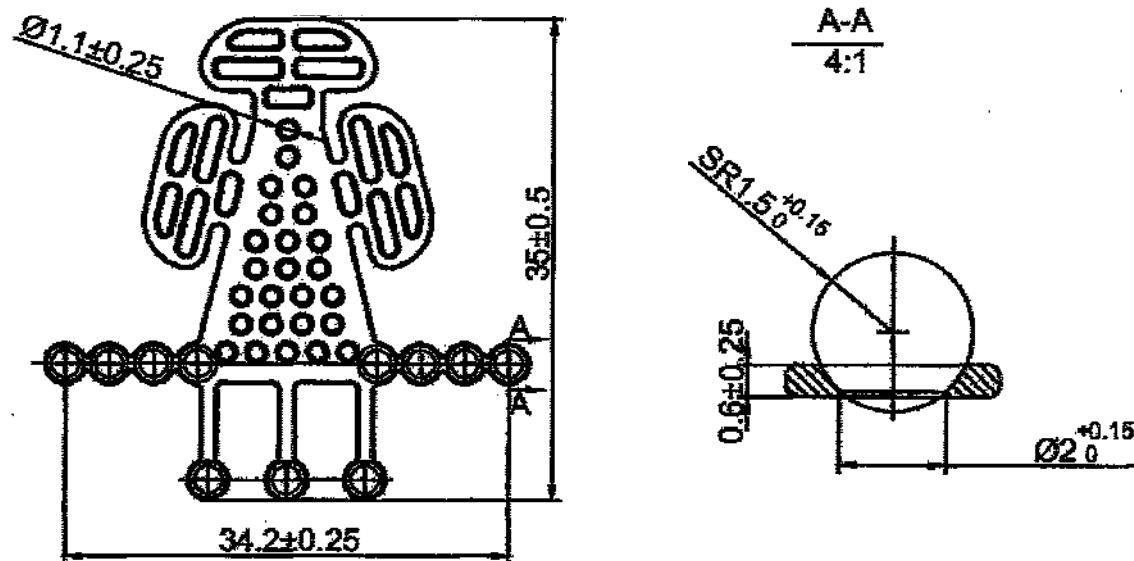



Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others μm
35±0,5	0,6± 0,25	34,2± 0,25	1,1 ± 0,25 2 ^{+0,15} ₀	1,5 ^{+0,15} ₀	T=1.65±20% S=2.88±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина рамная / Plate Frame

Пластина рамная JZQ 08 размер 1,5 мм, отверстий 4 / Plate Frame JZQ 08, size 1.5 mm holes: 4

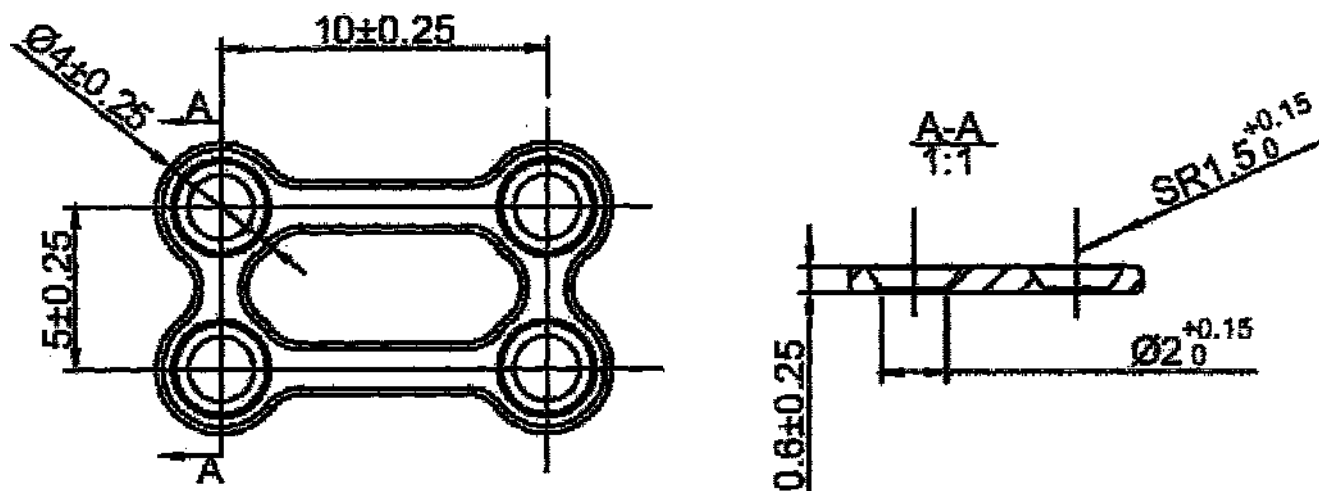


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter outside with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6± 0,25	10± 0,25 5± 0,25	4± 0,25	2 ₀ ^{+0.15}	4	1,5 ₀ ^{+0.15}	T=0.34±20% S=0.59±20%	0,4 0,8 1,6

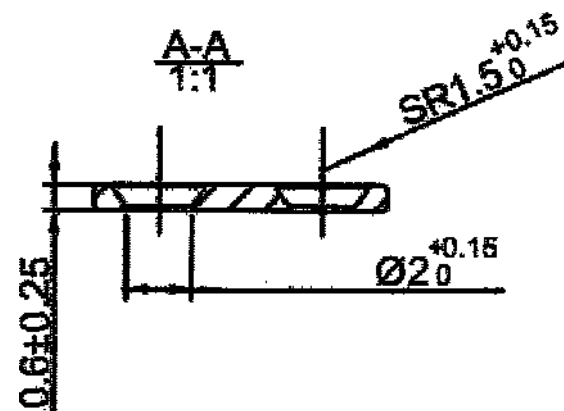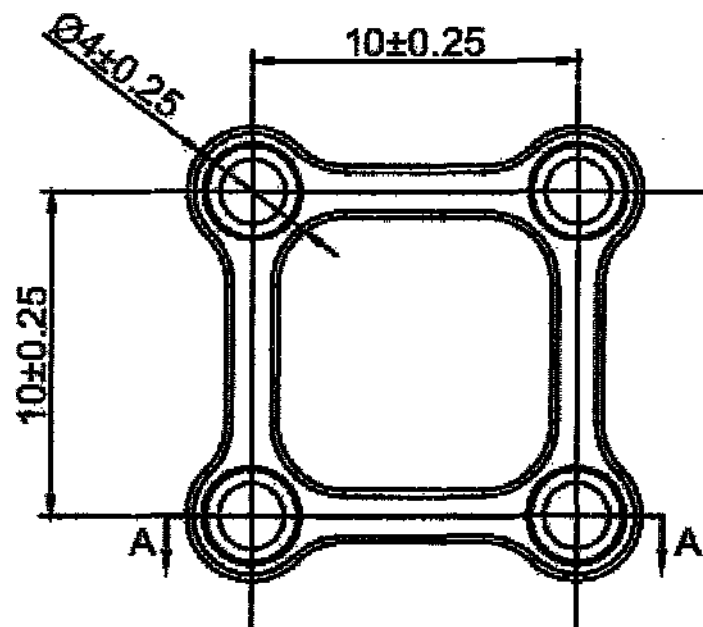

Толщина пластины погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter outside with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass tolerances, g ± g	Roughness, outside/inner/others µm,
0,6± 0,25	10± 0,25	4± 0,25	2 ₀ ^{+0,15}	4	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.34±20% S=0.59±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина рамная JZQ 08 квадратная, размер 2,0 мм, отверстий 4 / Plate Frame JZQ 08, square, size 2.0 mm holes: 4

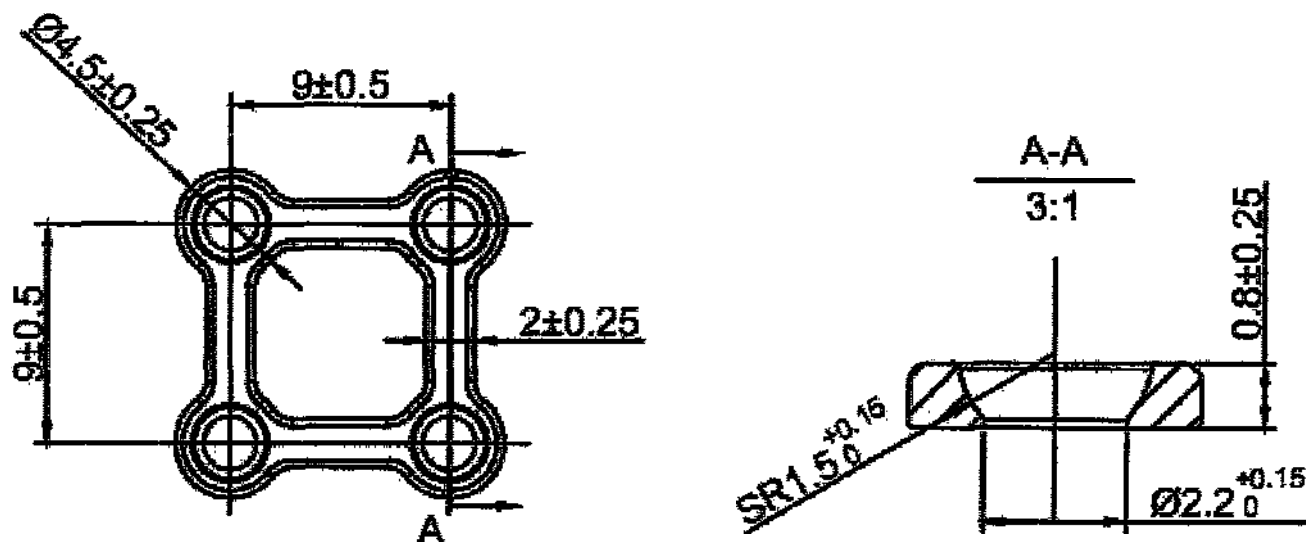

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
0,8± 0,25	9± 0,5	2± 0,25	4,5± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	4	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.35±20% S=0.62±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина опорная / Plate Strut

Пластина опорная JZQ 08, размер 1,5 мм, отверстий 2x8 / Plate Strut JZQ 08, size 1.5 mm holes: 2x8

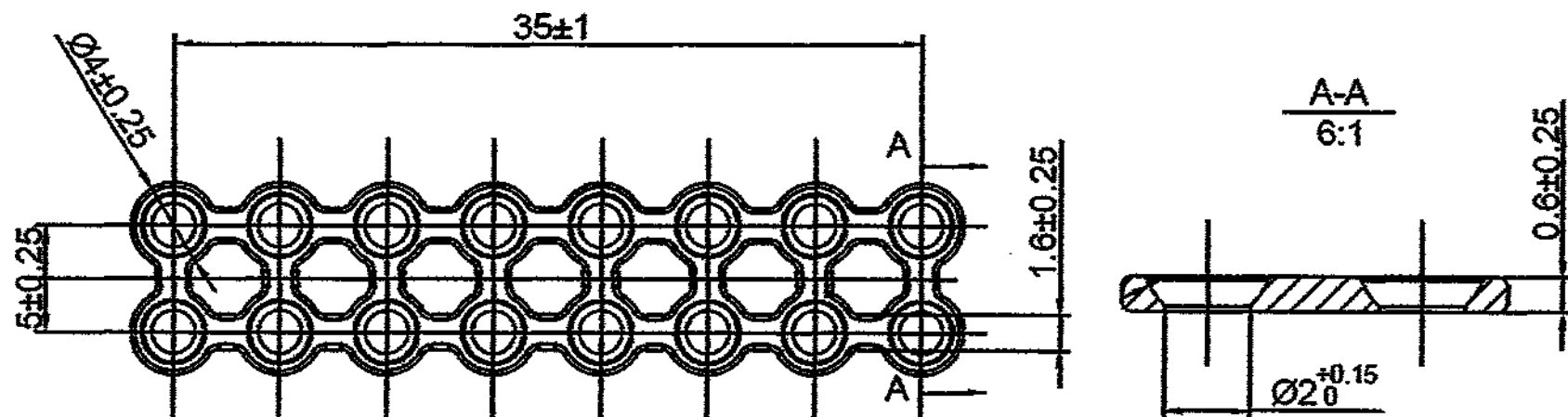


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6± 0,25	5± 0,5 35±1	1,6± 0,25	4± 0,25	2 ^{+0,15} ₀	16	T=1.07±20% S=1.87±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина опорная JZQ 08 размер 2,0 мм, отверстий 2x4 / Plate Strut JZQ 08, size 2.0 mm holes: 2x4

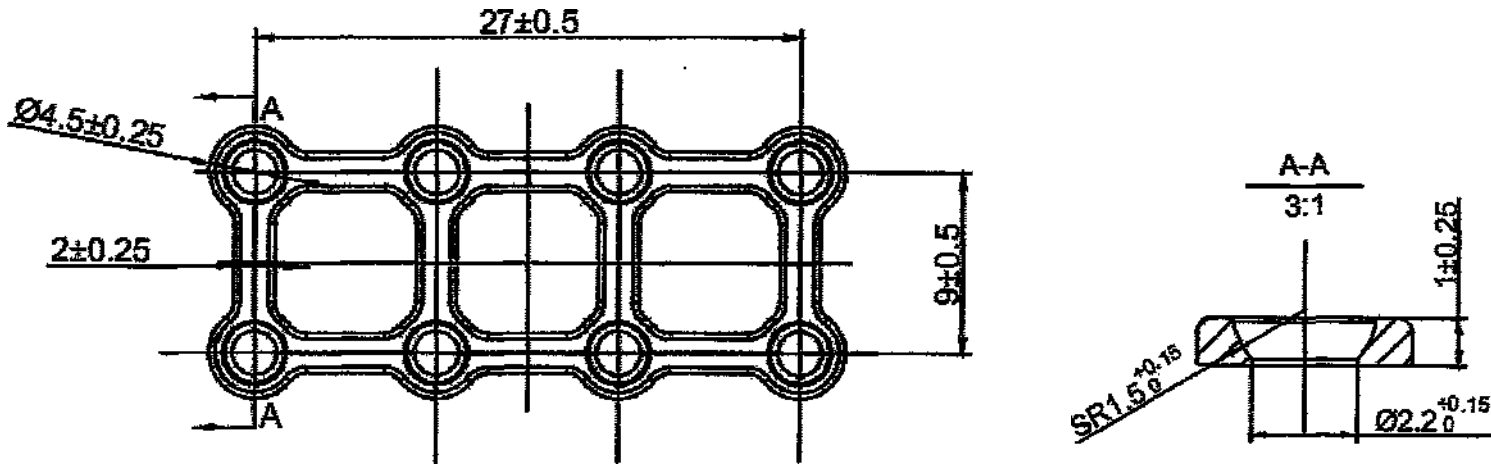

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
1± 0,25	27± 0,5 9± 0,5	2± 0,25	4,5± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	8	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=0.83±20% S=1.45±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина опорная YSQ 19 нижнечелюстная изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 8 / Plate Strut YSQ 19 Mandible curved, size 2.0 mm holes: 8

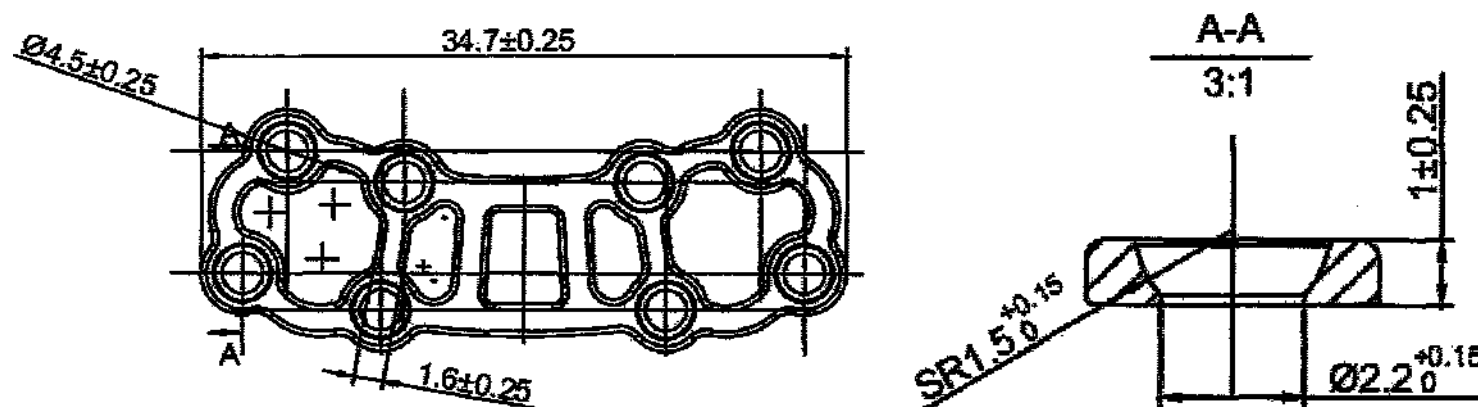

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
34,7±0,5	1± 0,25	1,6± 0,25	4,5± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	8	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=1.03±20% S=1.79±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина опорная JZQ 01, правая/левая, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x23 мм / Plate Strut JZQ 01, right/left, size 1.5 mm, holes x length: 8x23 mm


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
23±2	1,2 ± 0,25	4 ± 0,25	8	T=0.26±20% S=0.45±20%	0,4 0,8 3,2

Пластина опорная опорная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x31 мм / Plate Strut JZQ 03, right/left, size 2.0 mm, holes x length: 8x31 mm

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μ m, outside/inner/others
31±2	1,2 ± 0,25	13 ± 0,25	8	T=1.08±20% S=1.88±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина ячеистая / Plate Mesh

Пластина ячеистая YSQ 16, размер 1,5 мм, 100 мм X 100 мм / Plate Mesh YSQ 16, size 1.5 mm, 100 mm X 100 mm

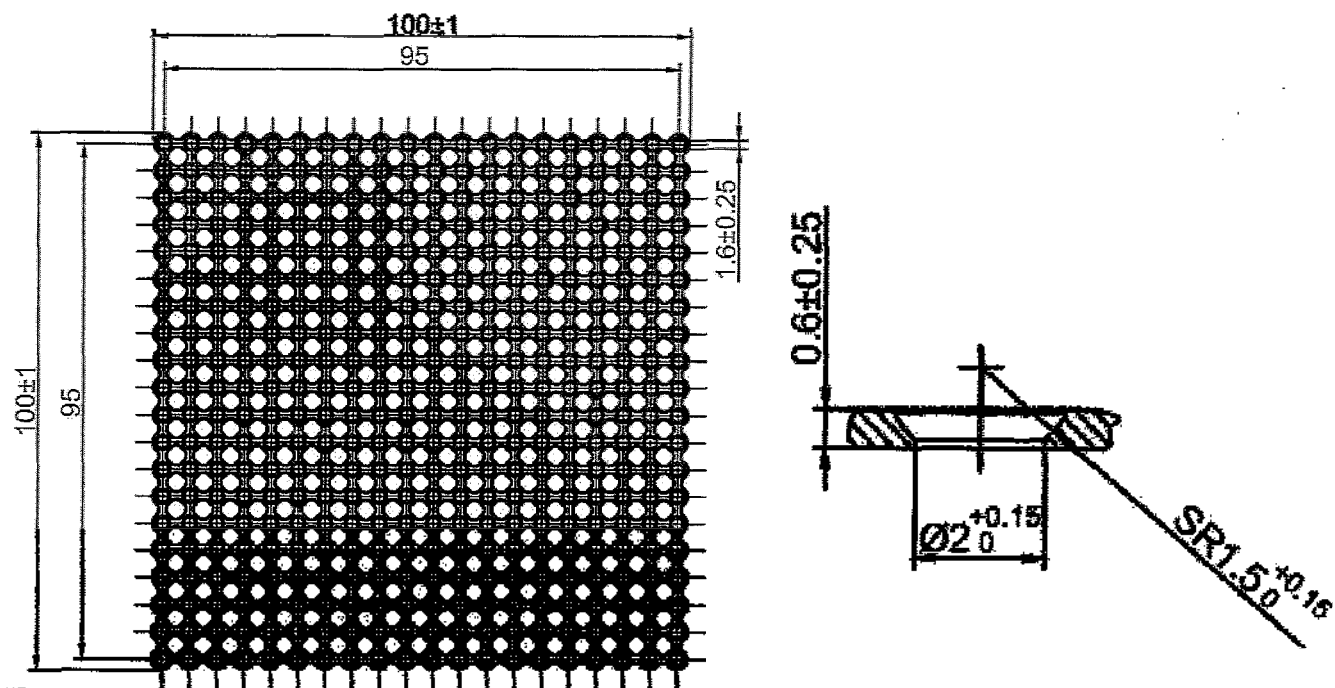

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/други
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
100±1	0,6± 0,25	95±0,5	1,6± 0,25	4,5± 0,25	2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=13.5±20% S=23.55±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина ячеистая регулируемая, квадратная YSQ 16, размер 1,5 мм, габариты: 38 мм X 45 мм, 100 мм X 100 мм / Plate Mesh Contourable, squared YSQ 16, size 1.5 mm, dimensions: 38 mm X 45 mm, 100 mm X 100 mm

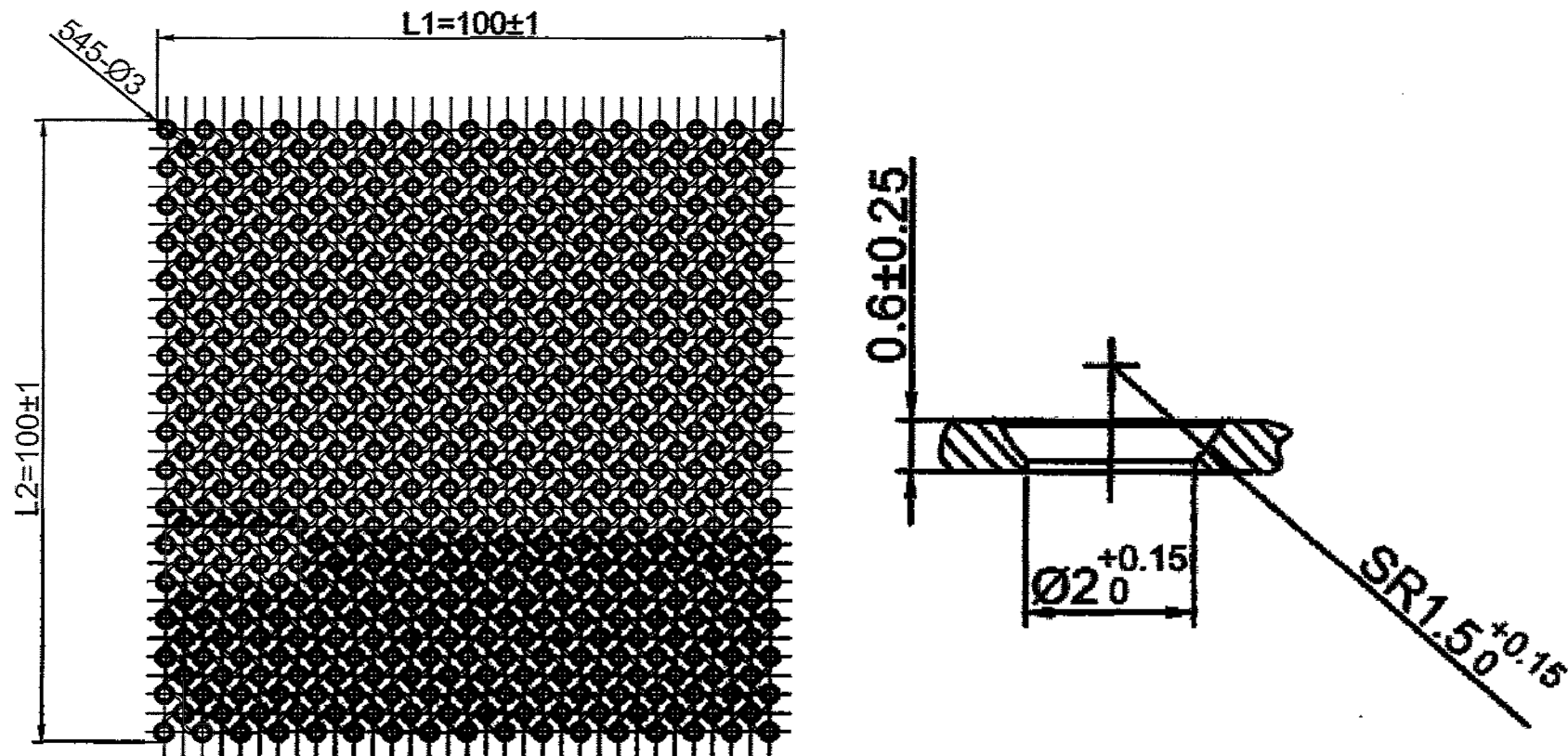

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6± 0,25	3± 0,5	2 ^{+0,15} ₀	1,5 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2

Описание	Description	L1 ±1 мм (mm)	L2 ±1 мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Пластина ячеистая регулируемая, квадратная YSQ 16, размер 1,5 мм, габариты: 38 мм X 45 мм	/ Plate Mesh Contourable, squared YSQ 16, size 1.5 mm, dimensions: 38 mm X 45 mm	38	45	T=4.62±20% S=8.05±20%
Пластина ячеистая регулируемая, квадратная YSQ 16, размер 1,5 мм, габариты: 100 мм X 100 мм	/ Plate Mesh Contourable, squared YSQ 16, size 1.5 mm, dimensions: 100 mm X 100 mm	100	100	T=27±20% S=47.1±20%

Пластина ячеистая регулируемая, круглая YSQ 16, размер 1,5 мм, диаметр 30 мм, 70 мм, 100 мм / Plate Mesh Contourable, round YSQ 16, size 1.5 mm, diameter: 30 mm, 70 mm, 100 mm

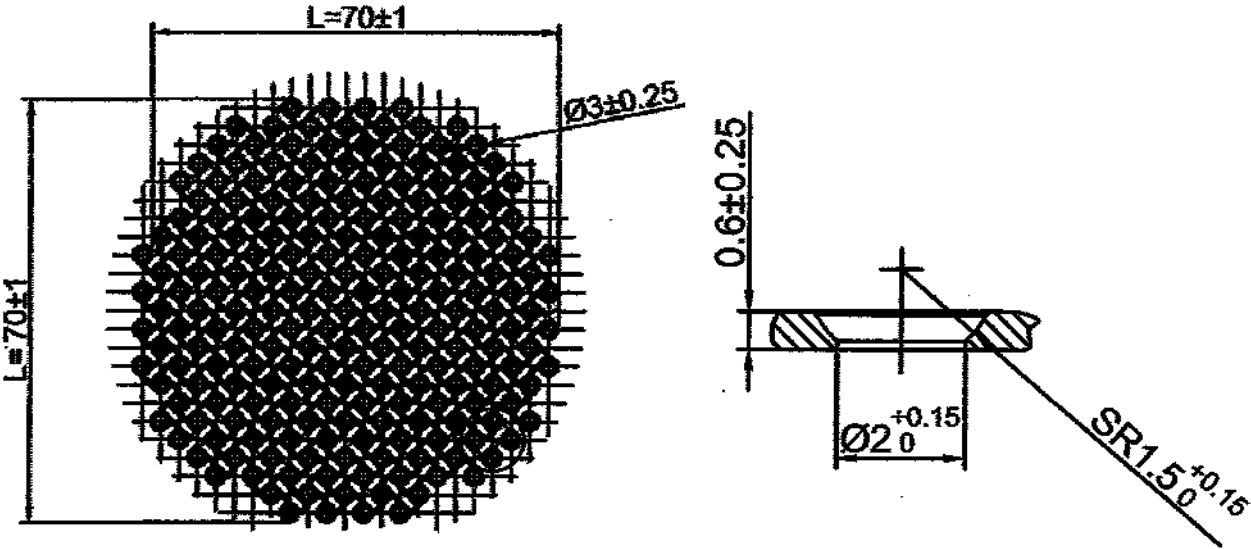


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6± 0,25	3± 0,25	2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	0,4 0,8 3,2

Описание	Description	L ± 0,1 мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Пластина ячеистая регулируемая, круглая YSQ 16, размер 1,5 мм, диаметр 30 мм	Plate Mesh Contourable, round YSQ 16, size 1.5 mm, diameter: 30 mm	30	T=1.91±20% S=3.34±20%
Пластина ячеистая регулируемая, круглая YSQ 16, размер 1,5 мм, диаметр 70 мм	Plate Mesh Contourable, round YSQ 16, size 1.5 mm, diameter: 70 mm	70	T=10.39±20% S=18.17±20%
Пластина ячеистая регулируемая, круглая YSQ 16, размер 1,5 мм, диаметр 100 мм	Plate Mesh Contourable, round YSQ 16, size 1.5 mm, diameter: 100 mm	100	T=21.2±20% S=37.09±20%

Крышки трепанационных отверстий / Burr Hole Covers


Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, размер 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм / Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, size 12 mm, 15 mm, 17 mm, 24 mm

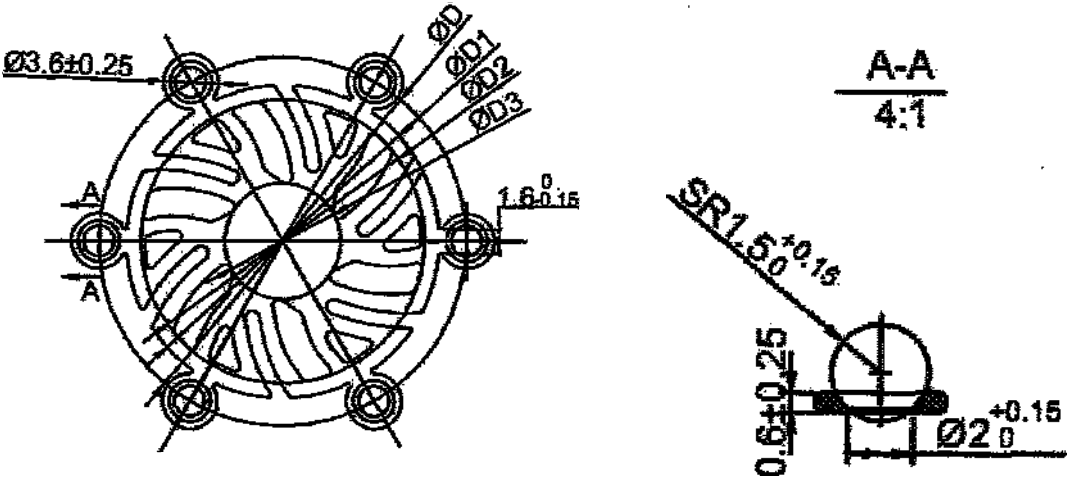

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6± 0,25	1,6 ⁰ _{-0,15}	3,6± 0,25	2 ^{+0,15} ₀	1,5 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	D ±0,5, мм (mm)	D1 ±0,25, мм (mm)	D2 ±0,1, мм (mm)	D3 ±0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, size 12 mm	Крышки trepanационных отверстий YSQ 16, 1,5, размер 12 мм	12	9	7,65	3,75	T=0.31±20% S=0.53±20%
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, size 15 mm	Крышки trepanационных отверстий YSQ 16, 1,5, размер 15 мм	15	12	10,5	4,68	T=0.48±20% S=0.83±20%
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, size 17 mm	Крышки trepanационных отверстий YSQ 16, 1,5, размер 17 мм	17	14	12,5	5	T=0.61±20% S=1.07±20%
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, size 24 mm	Крышки trepanационных отверстий YSQ 16, 1,5, размер 24 мм	24	20,4	18,5	7,54	T=1.22±20% S=2.14±20%


Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, для шунтирования или дренажа, размер 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм / Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, for Shunt or Drainage, size 12 mm, 15 mm, 17 mm, 24 mm

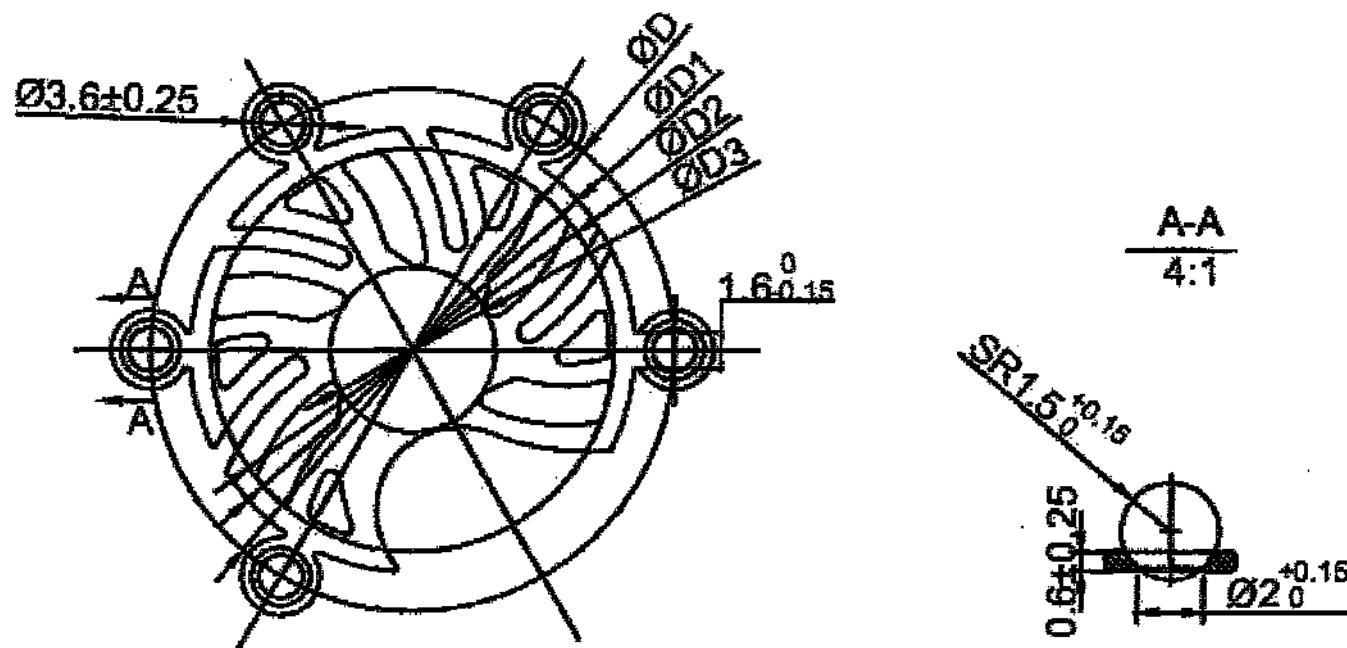

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
0,6±0,25	1,6 ⁰ _{-0,15}	3,6±0,25	2 ^{+0,15} ₀	1,5 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2


Description	Описание	D $\pm 0,5$, мм (mm)	D1 $\pm 0,25$, мм (mm)	D2 $\pm 0,1$, мм (mm)	D3 $\pm 0,1$, мм (mm)	Масса с погрешностями, г $\pm$ г / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, for Shunt or Drainage, size 12 mm	Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, для пунтирования или дренажа, размер 12 мм	12	9	7,65	3,75	T=0.23 $\pm$ 20% S=0.4 $\pm$ 20%
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, for Shunt or Drainage, size 15 mm	Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, для пунтирования или дренажа, размер 15 мм	15	12	10,5	4,68	T=0.36 $\pm$ 20% S=0.63 $\pm$ 20%
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, for Shunt or Drainage, size 17 mm	Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, для пунтирования или дренажа, размер 17 мм	17	14	12,5	5	T=0.46 $\pm$ 20% S=0.8 $\pm$ 20%
Burr Hole Covers YSQ 16, 1,5, for Shunt or Drainage, size 24 mm	Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, для пунтирования или дренажа, размер 24 мм	24	20,4	18,5	7,54	T=0.92 $\pm$ 20% S=1.6 $\pm$ 20%

Пластина двойной ширины YSQ 19, размер 2,0 мм, отверстия 9,12 / Plate Double Wide YSQ 19, size 2.0, holes 9,12

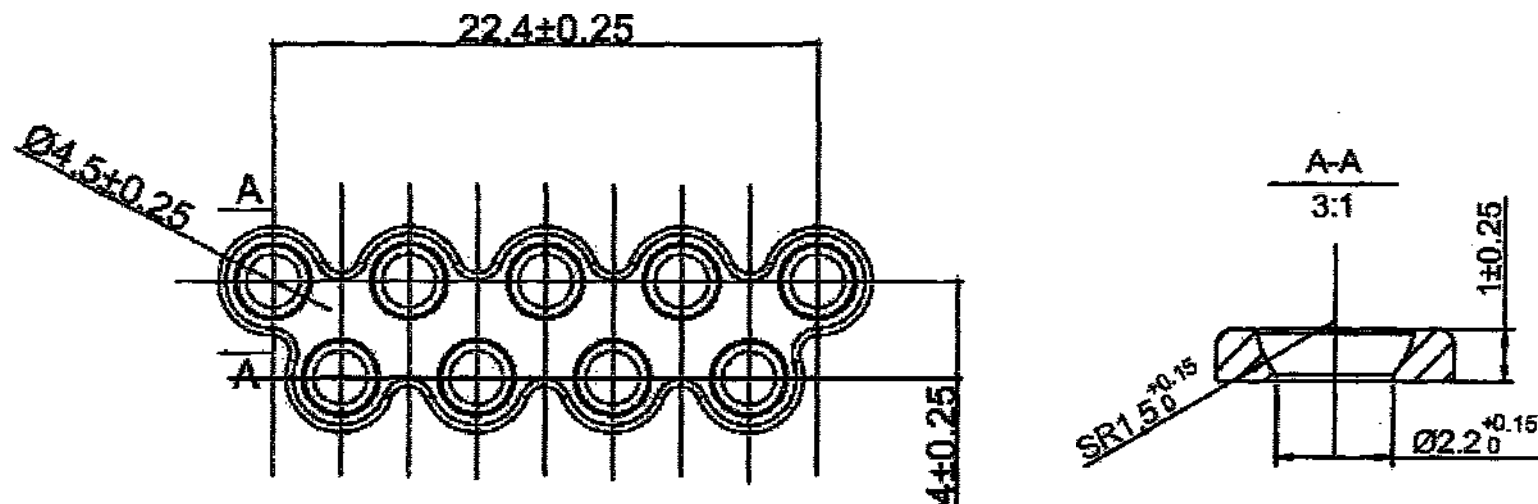

Пластина двойной ширины YSQ 19, размер 2,0 мм, отверстия 9

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
1 ± 0,25	22,4 ± 0,25 4 ± 0,25	4,5 ± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	9	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=1.17±20% S=2.05±20%	0,4 0,8 3,2

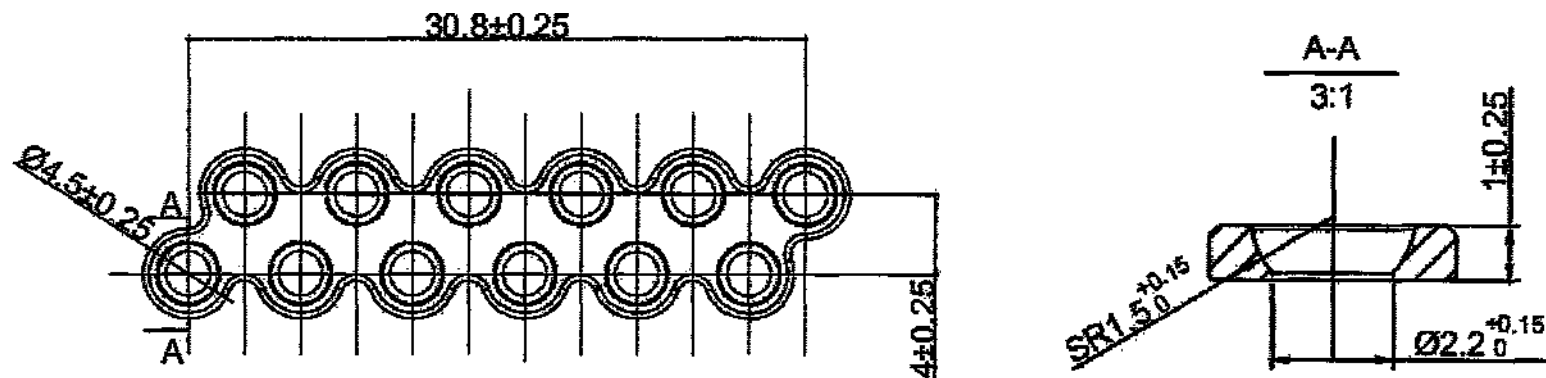


Пластина двойной ширины YSQ 19, размер 2,0 мм, отверстия 12

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Количество отверстий	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Number of holes	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
1 ± 0,25	30,8 ± 0,25 4 ± 0,25	4,5 ± 0,25	2,2 ₀ ^{+0,15}	12	1,5 ₀ ^{+0,15}	T=1.58±20% S=2.76±20%	0,4 0,8 3,2


Пластина нижнечелюстная / Plate Mandible

Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, правая/левая размер 2,0 мм мм, угловая, отверстий 6+21 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 angled right/left, size 2.0 mm mm, holes 6+21

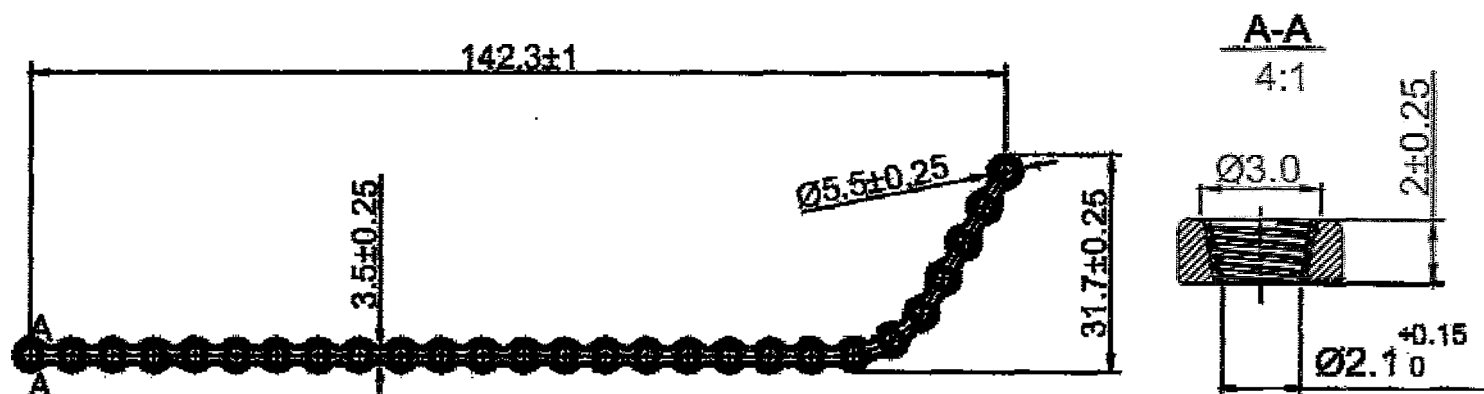


Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм $\pm$ мм	Толщина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Масса с погрешностями, г $\pm$ г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate thickness with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate width with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole diameter outside with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole diameter with tolerance, mm $\pm$ mm	Mass with tolerances, g $\pm$ g	Roughness, μ m, outside/inner/others
$142,3 \pm 1$	$2 \pm 0,25$	$31,7 \pm 0,25$ $3,5 \pm 0,25$	$5,5 \pm 0,25$	$2 \begin{smallmatrix} +0,15 \\ 0 \end{smallmatrix}$ $3 \pm 0,25$	$T=9.41 \pm 20\%$ $S=16.41 \pm 20\%$	0,4 0,8 3,2

Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, правая/левая размер 2,4 мм, угловая, отверстий 6+21 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 angled right/left, size 2.4 mm, holes 6+21

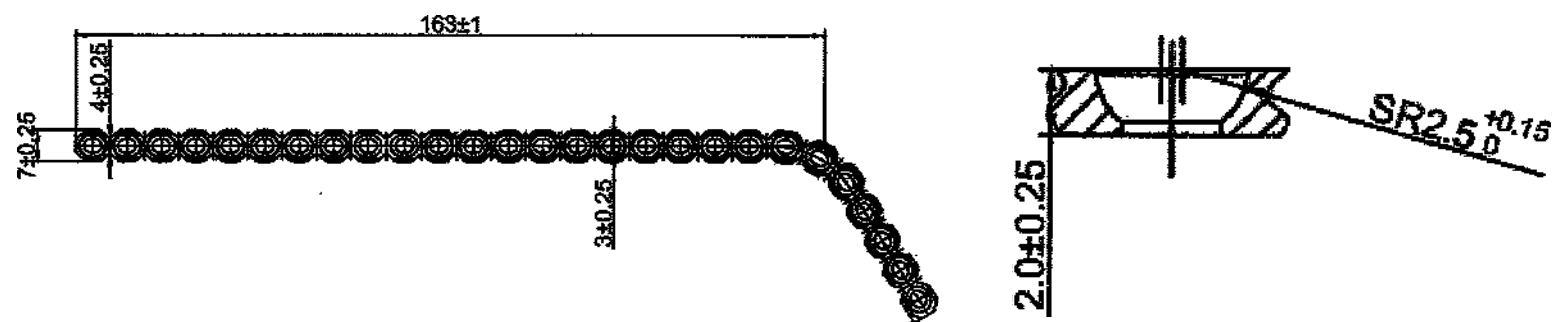

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
163±1	2± 0,25	7± 0,25 4± 0,25	2,5 ₀ ^{+0.15}	T=19.26±20% S=33.6±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,0 мм, отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.0 mm, holes: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6

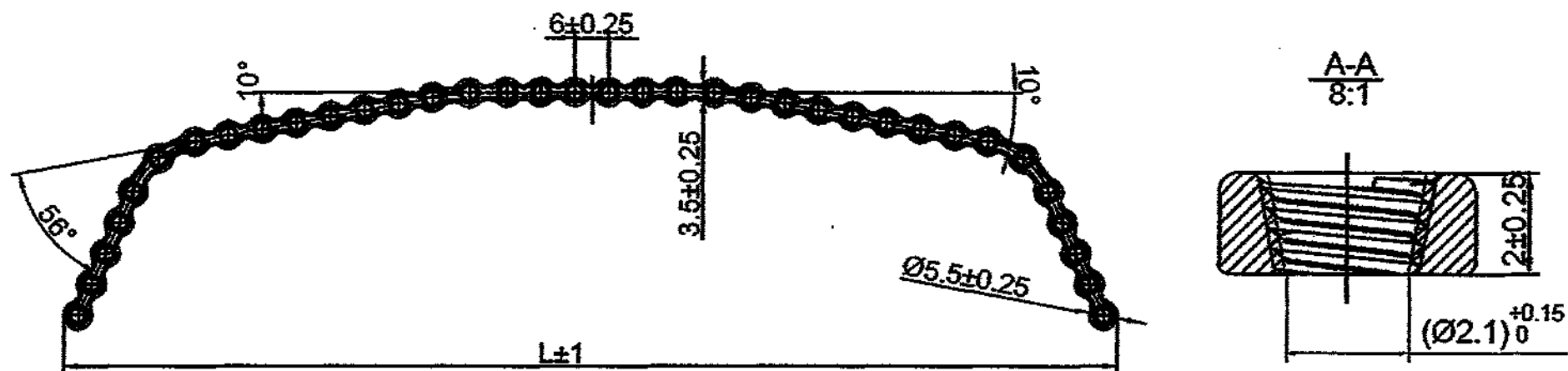

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Угол, °	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Angle, °	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6±0,25	2± 0,25	3,5±0,25	5,5± 0,25	10 56	2,1 ₀ ^{+0,15}	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.0 mm, holes: 4 + 20 + 4	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,0 мм, отверстия: 4 + 20 + 4	164	4+20+4	T=10.15±20% S=17.7±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.0 mm, holes: 5 + 22 + 5	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,0 мм, отверстия: 5 + 22 + 5	202	5+22+5	T=12.5±20% S=21.8±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.0 mm, holes: 6 + 24 + 6	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,0 мм, отверстия: 6 + 24 + 6	218	6+24+6	T=13.49±20% S=23.53±20%


Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6

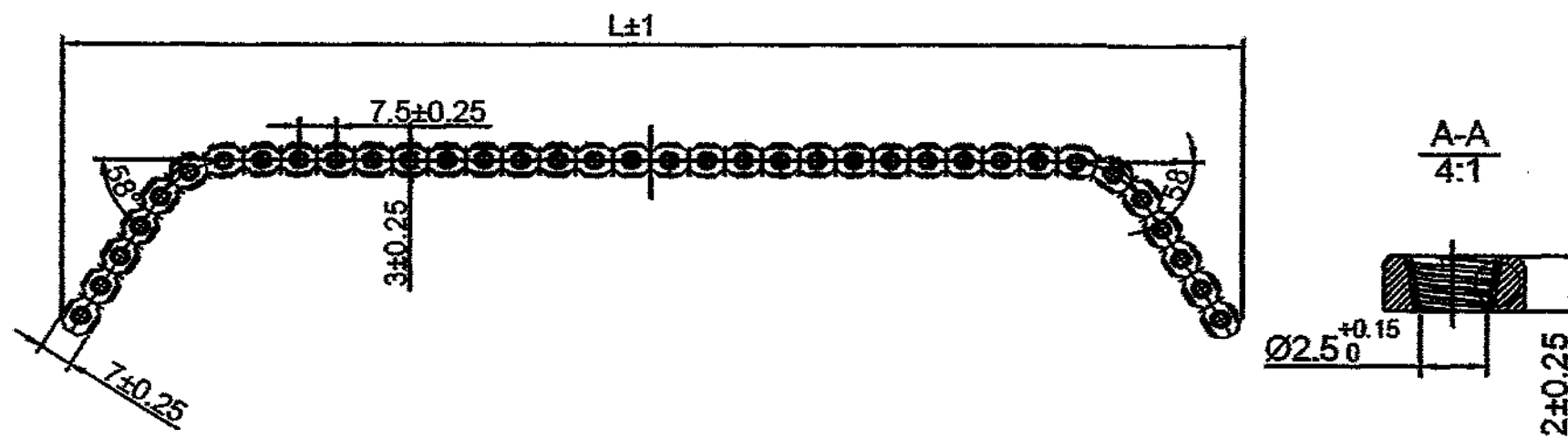

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Угол, °	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Angle, °	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2±0,25	7,5±0,25	7±0,25	3±0,25	58	2,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 1,6

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 4 + 20 + 4	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4	194	4+20+4	T=9.99±20% S=17.43±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 5 + 22 + 5	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 5 + 22 + 5	218	5+22+5	T=10.71±20% S=18.68±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 6 + 24 + 6	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 6 + 24 + 6	242	6+24+6	T=11.97±20% S=20.88±20%


Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, 3+3 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 crescent - shaped, size 2.0 mm, holes 2+2, 3+3

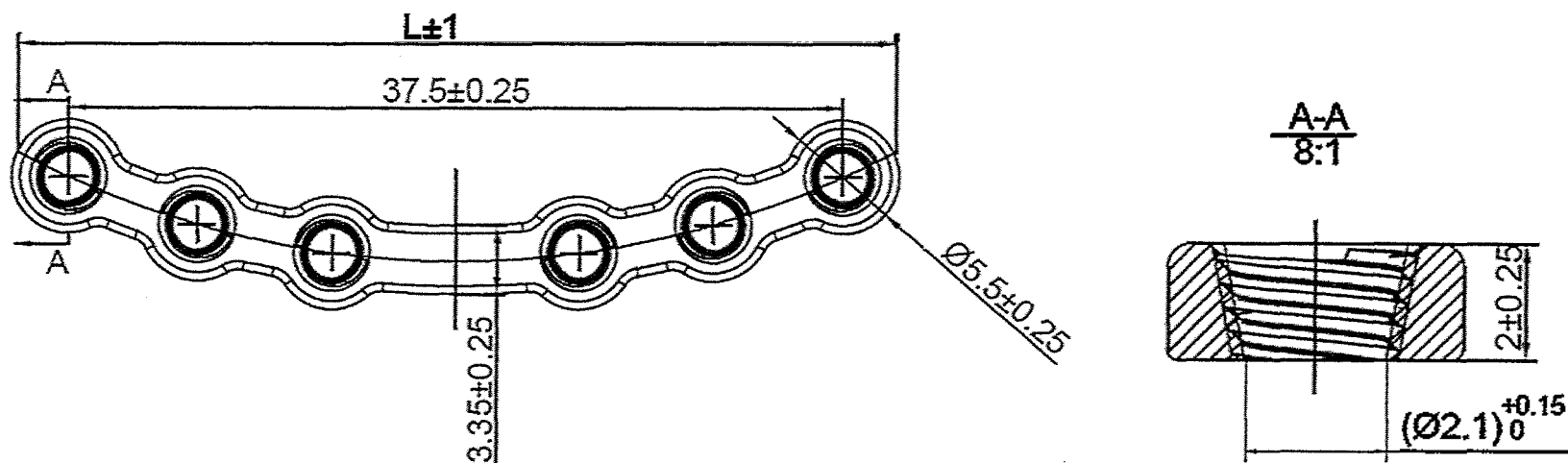

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
37,5±0,25	2± 0,25	3,35±0,25	5,5± 0,25	2,1 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK YSQ 20 crescent - shaped, size 2.0 mm, holes 2+2	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2	35	2+2	T=2.17±20% S=3.78±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 crescent - shaped, size 2.0 mm, holes 3+3	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3	46	3+3	T=2.85±20% S=4.97±20%


Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,4 мм, отверстия: 2+2, 3+3 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 crescent - shaped, size 2.4 mm, holes 2+2, 3+3

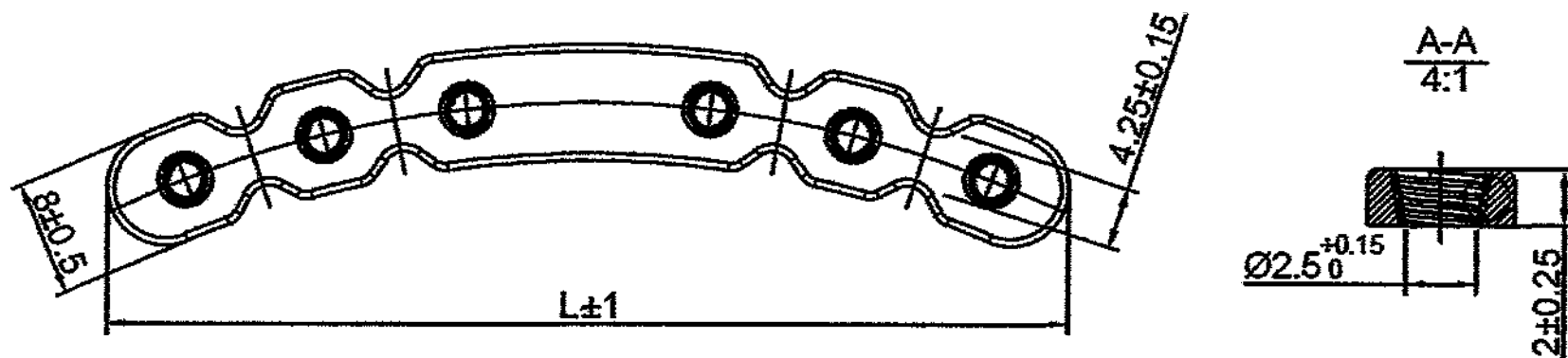

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2± 0,25	8±0,25	4,25±0,15	2,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK YSQ 20 crescent - shaped, size 2.4 mm, holes 2+2	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,4 мм, отверстия: 2+2	46	2+2	T=3.6±20% S=6.28±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 crescent - shaped, size 2.4 mm, holes 3+3	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,4 мм, отверстия: 3+3	66	3+3	T=5.04±20% S=8.79±20%


Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, 4+4 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 arc- shaped, size 2.0 mm, holes 3+3, 4+4

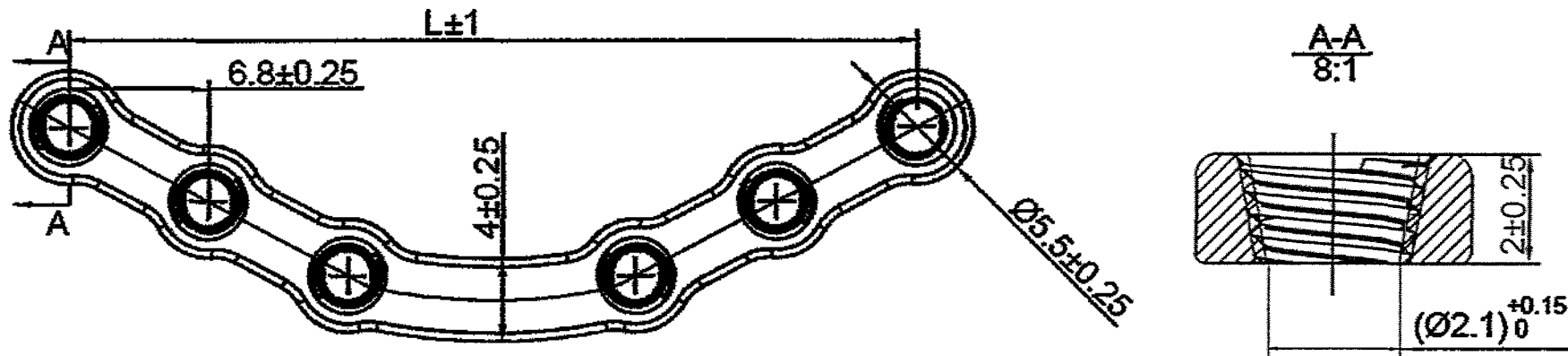

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6,8±0,25	2± 0,25	4±0,25	5,5± 0,25	2,1 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт.	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK YSQ 20 arc-shaped, size 2.0 mm, holes 3+3	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3	41,2	3+3	T=2.97±20% S=5.18±20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 arc-shaped, size 2.0 mm, holes 4+4	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,0 мм, отверстия: 4+4	54,8	4+4	T=3.56±20% S=6.22±20%


Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,4 мм, отверстия: 3+3, 4+4 / Plate Mandible LOCK YSQ 20 arc-shaped, size 2.4 mm, holes 3+3, 4+4

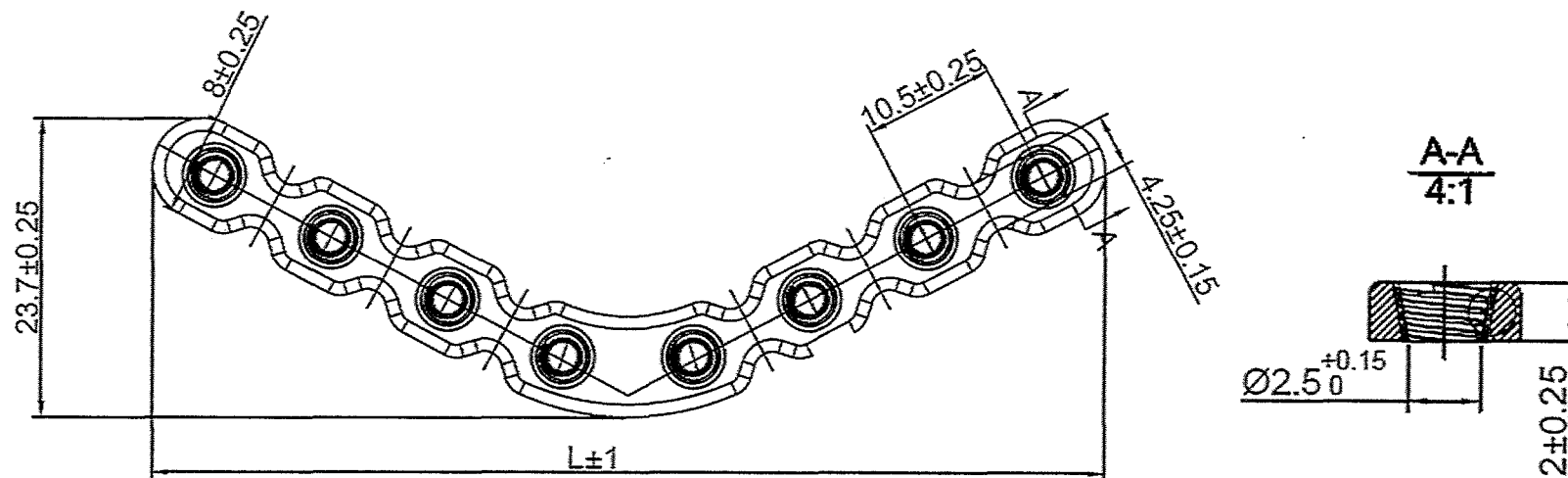

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм $\pm$ мм	Толщина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate thickness with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate width with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole width with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole diameter with tolerance, mm $\pm$ mm	Roughness, μ m, outside/inner/others
10.5 ± 0.25	2 ± 0.25	23.7 ± 0.25 8 ± 0.25	4.25 ± 0.15	$2.5^{+0.15}_0$	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	$L \pm 1$, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт	Масса с погрешностями, г $\pm$ г / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Plate Mandible LOCK YSQ 20 arc-shaped, size 2.4 mm, holes 3+3	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,4 мм, отверстия: 3+3	58	3+3	T=5.04 $\pm$ 20% S=8.79 $\pm$ 20%
Plate Mandible LOCK YSQ 20 arc-shaped, size 2.4 mm, holes 4+4	Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,4 мм, отверстия: 4+4	75,6	4+4	T=5.04 $\pm$ 20% S=8.79 $\pm$ 20%

Пластина нижнечелюстная YSQ 20, угловая, правая/левая размер 2,4 мм. отверстий 6+21 / Plate Mandible YSQ 20 angled right/left, size 2.4 mm, holes 6+21

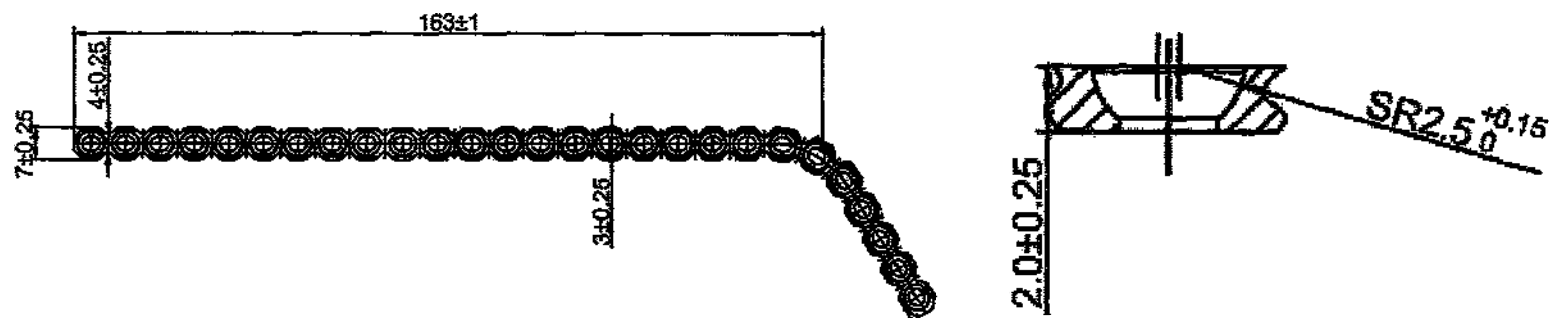

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
163±1	2± 0,25	7± 0,25 4± 0,25	2,5 ₀ ^{+0,15}	T=9.24±20% S=16.12±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина нижнечелюстная YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6 / Plate Mandible YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6

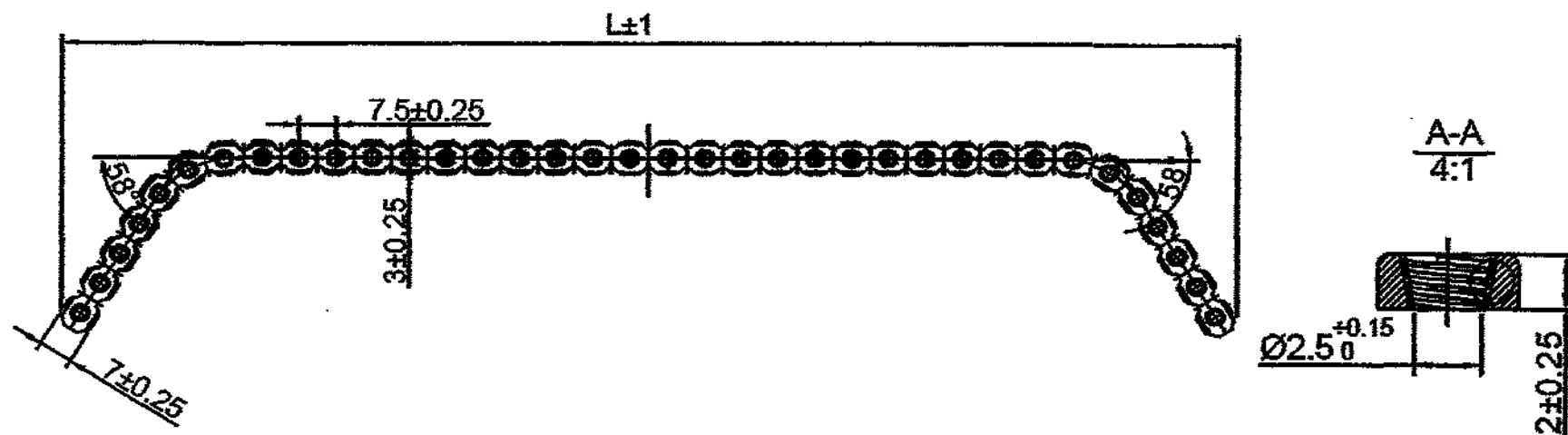

Толщина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина пластины с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Угол, °	Диаметр отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate thickness with tolerance, mm $\pm$ mm	Distance between holes with tolerance, mm $\pm$ mm	Plate width with tolerance, mm $\pm$ mm	Hole width with tolerance, mm $\pm$ mm	Angle, °	Hole diameter with tolerance, mm $\pm$ mm	Roughness, μ m, outside/inner/others
2 ± 0.25	7.5 ± 0.25	7 ± 0.25	3 ± 0.25	58	$2.5^{+0.15}_0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	E ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 4 + 20 + 4	Пластина нижнечелюстная YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4	194	4+20+4	T=9.71±20% S=16.94±20%
Plate Mandible YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 5 + 22 + 5	Пластина нижнечелюстная YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 5 + 22 + 5	218	5+22+5	T=11.93±20% S=20.82±20%
Plate Mandible YSQ 20 double angled, size 2.4 mm, holes: 6 + 24 + 6	Пластина нижнечелюстная YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 6 + 24 + 6	242	6+24+6	T=12.87±20% S=22.45±20%


Пластина нижнечелюстная с промежутком по центру ZEQ 01. размер 2,0 мм, отверстия: 4, 6 / Plate Mandible with centre space ZEQ 01, size 2.0 mm, holes: 4, 6

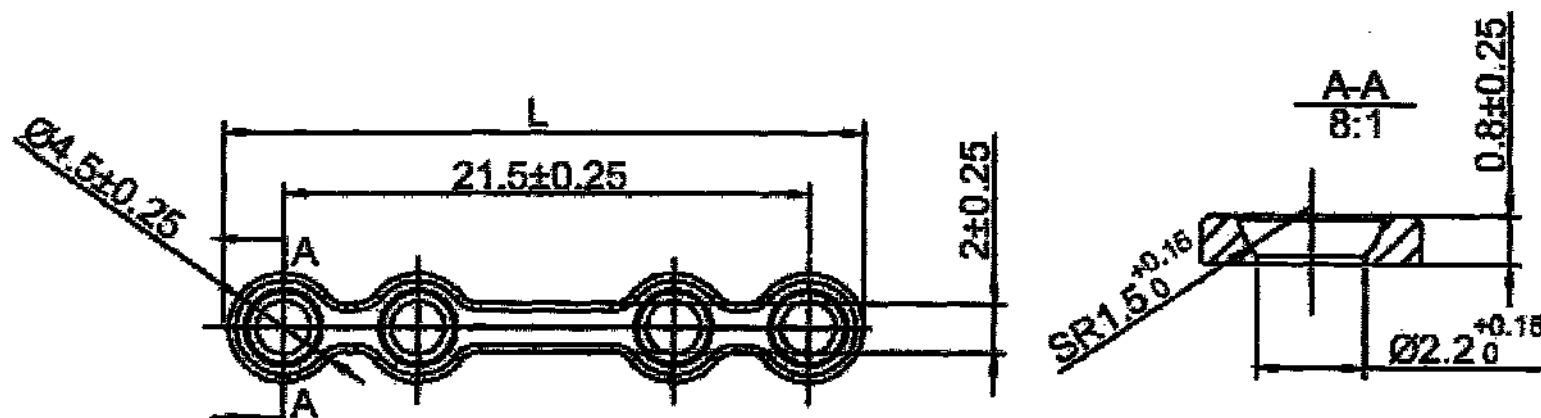

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
21,5±0,25	0,8± 0,25	2± 0,25	4,5± 0,25 2,2 ₀ ^{+0,15}	1,5 ₀ ^{+0,15}	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± L, mm (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, T ± t / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible with centre space ZEQ 01, size 2.0 mm, holes: 4	Пластина нижнечелюстная с промежутком по центру ZEQ 01. размер 2,0 мм, отверстия: 4	26	4	T=0.47±20% S=0.82±20%
Plate Mandible with centre space ZEQ 01, size 2.0 mm, holes: 6	Пластина нижнечелюстная с промежутком по центру ZEQ 01. размер 2,0 мм, отверстия: 6	38	6	T=0.68±20% S=1.19±20%


Пластина нижнечелюстная ZEQ 03 размер 2,0 мм, отверстия: 4, 6, 12, 20 / Plate Mandible ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 4, 6, 12, 20

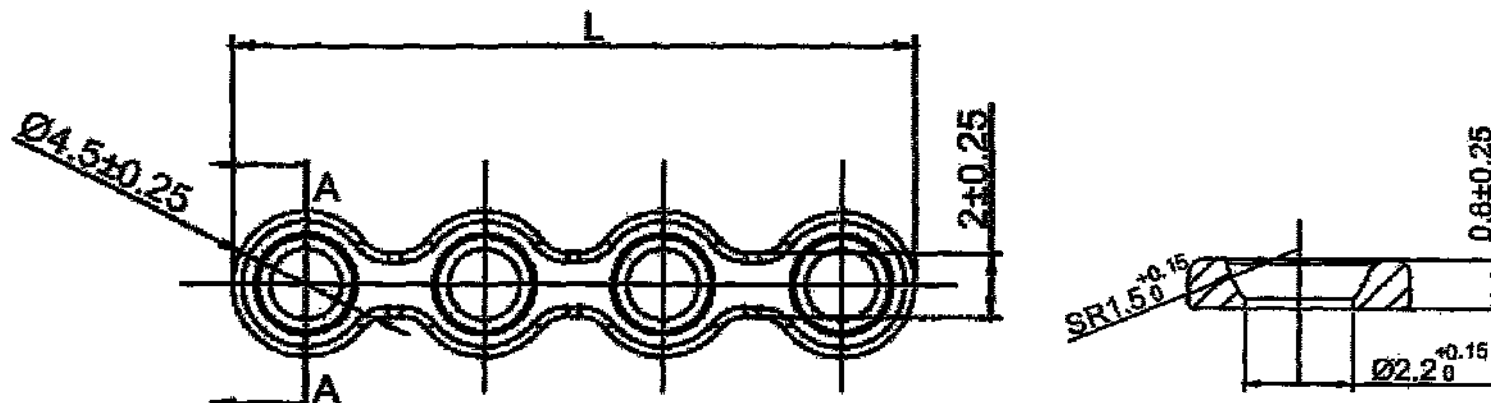

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
0,8 ± 0,25	2 ± 0,25	2,2 ^{+0,15} ₀	4,5 ± 0,25	1,5 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2


Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 4	Пластина нижнечелюстная ZEQ 03 размер 2,0 мм, отверстия: 4	23	4	T=0.41±20% S=0.72±20%
Plate Mandible ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 6	Пластина нижнечелюстная ZEQ 03 размер 2,0 мм, отверстия: 6	35	6	T=0.63±20% S=1.1±20%
Plate Mandible ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 12	Пластина нижнечелюстная ZEQ 03 размер 2,0 мм, отверстия: 12	70	12	T=1.26±20% S=2.2±20%
Plate Mandible ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 20	Пластина нижнечелюстная ZEQ 03 размер 2,0 мм, отверстия: 20	118	20	T=2.12±20% S=3.71±20%

Пластина нижнечелюстная закрученная ZEQ 02, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 4 / Plate Mandible twisted ZEQ 02 right/left, size 2.0 mm, holes: 4

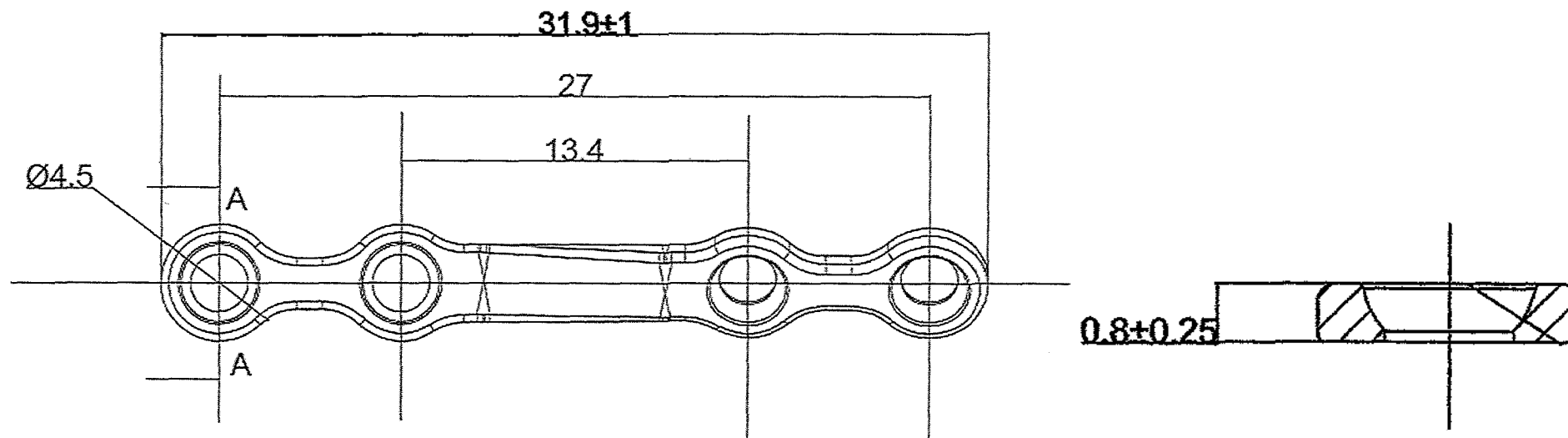

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Внешний диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Hole outside diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
0,8 ± 0,25	13,4±0,25 27±0,5	31,9±1	4,5 ± 0,25	T=0.47±20% S=0.82±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина нижнечелюстная переходная, прямая ZE Q 03, размер 2,4 мм, отверстия: 12, 20 / Plate Mandible Adaption straight ZE Q 03, size 2.4 mm, holes: 12, 20

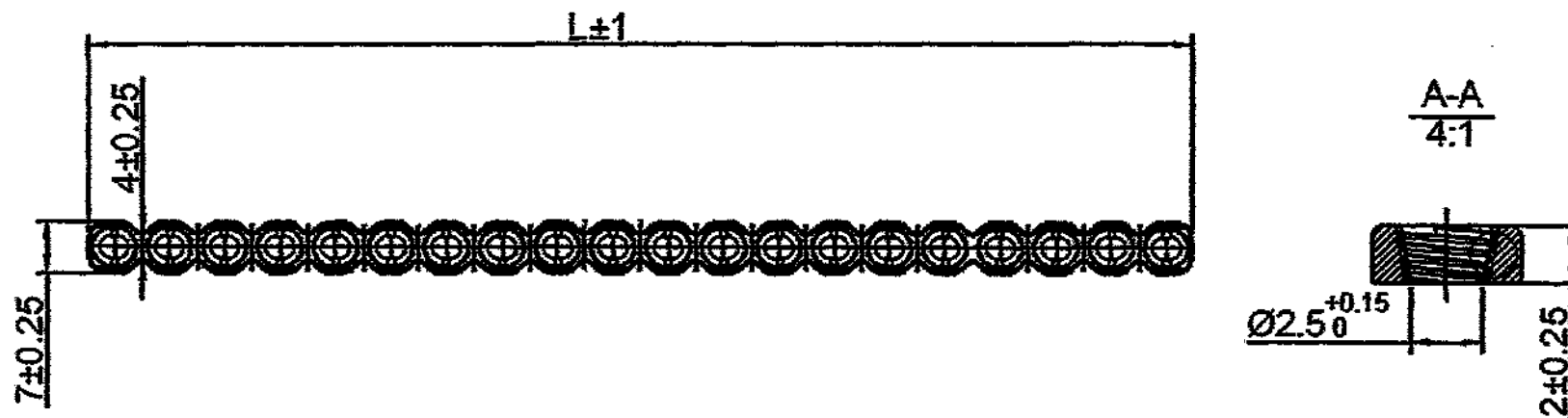

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	4±0,25 7±0,25	2,5 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible Adaption straight ZE Q 03, size 2.4 mm, holes: 12	Пластина нижнечелюстная переходная, прямая ZE Q 03, размер 2,4 мм, отверстия: 12	90	12	T=3.12±20% S=5.43±20%
Plate Mandible Adaption straight ZE Q 03, size 2.4 mm, holes: 20	Пластина нижнечелюстная переходная, прямая ZE Q 03, размер 2,4 мм, отверстия: 20	150	20	T=5.22±20% S=9.11±20%


Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZEQ 03, размер 2,0 мм, отверстия: 6, 12, 20 / Plate Mandible LOCK, straight ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 6, 12, 20

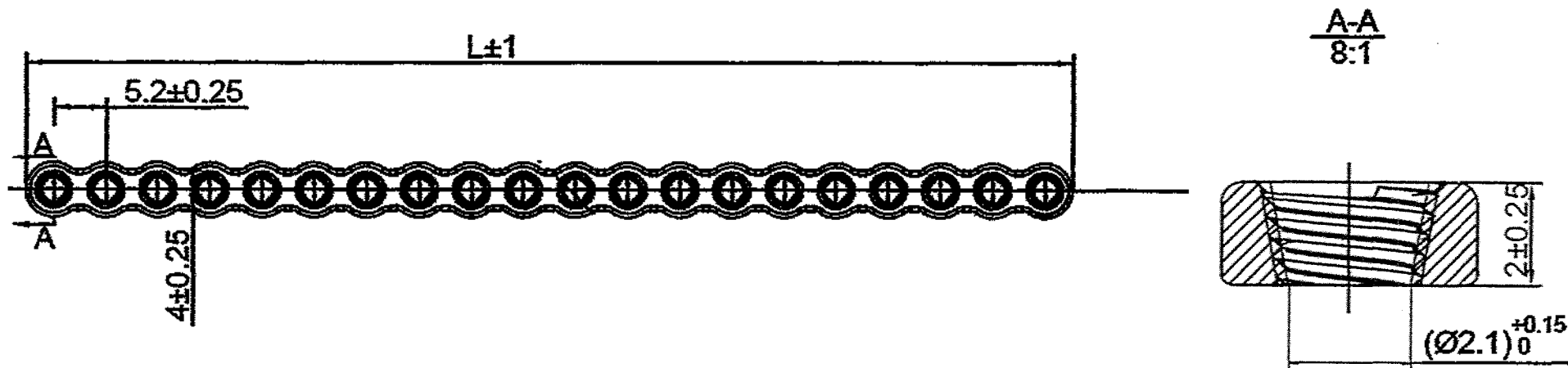

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
2 ± 0,25	4±0,25	5,2±0,25	2,1 ^{+0.15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK, straight ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 6	Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZEQ 03, размер 2,0 мм, отверстия: 6	35	6	T=1.73±20% S=3.02±20%
Plate Mandible LOCK, straight ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 12	Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZEQ 03, размер 2,0 мм, отверстия: 12	70	12	T=3.47±20% S=6.04±20%
Plate Mandible LOCK, straight ZEQ 03 size 2.0 mm, holes: 20	Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZEQ 03, размер 2,0 мм, отверстия: 20	116	20	T=5.74±20% S=10.02±20%

Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZE-Q 03, размер 2,4 мм, отверстия: 6, 12, 20 / Plate Mandible LOCK, straight ZE-Q 03 size 2.4 mm, holes: 6, 12, 20

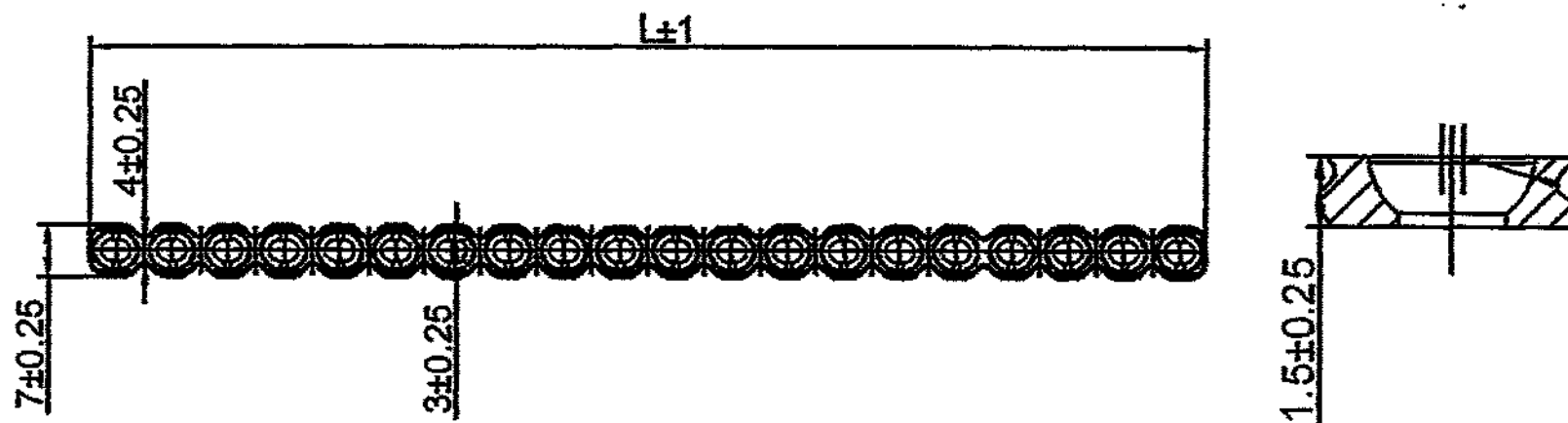


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,5 ± 0,25	7±0,25 4±0,25	3±0.25	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Mandible LOCK, straight ZE-Q 03 size 2.0 mm, holes: 6	Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZE-Q 03, размер 2,0 мм, отверстия: 6	45	6	T=3.6±20% S=6.28±20%
Plate Mandible LOCK, straight ZE-Q 03 size 2.0 mm, holes: 12	Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZE-Q 03, размер 2,0 мм, отверстия: 12	90	12	T=7.06±20% S=12.31±20%
Plate Mandible LOCK, straight ZE-Q 03 size 2.0 mm, holes: 20	Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZE-Q 03, размер 2,0 мм, отверстия: 20	150	20	T=11.52±20% S=20.1±20%

Пластина динамического бедренного винта (DHS) / Plate DHS

Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 3-12 с шагом 1 / Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 3-12 increments 1

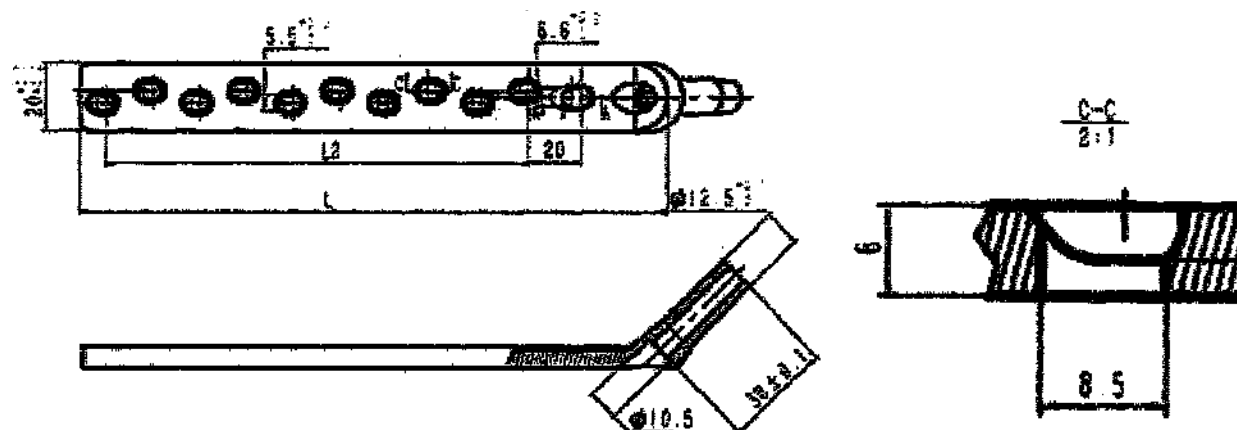

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр ножки с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Ширина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия головки пластины с погрешностями, мм ± мм	Длина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Stem diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Hole width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter head of plate with tolerance, mm ± mm	Hole length with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
6 ± 0,5	12,5 ^{+0,1} ₀	20 ^{+0,1} _{+0,2}	20 ± 0,5	8,5 ± 0,25 6,6 ^{+0,2} ₀ 5,5 ^{+0,2} ₀	10,5 ± 0,25	38 ± 0,1	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1 мм (mm)	L2 $\pm 0,5$ мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса погрешностями, г $\pm$ г / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 3	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 3	72	16	3	T=40 $\pm$ 20% S=72 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 4	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 4	88	32	4	T=46 $\pm$ 20% S=83 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 5	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 5	104	48	5	T=53 $\pm$ 20% S=95 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 6	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 6	120	64	6	T=59 $\pm$ 20% S=106 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 7	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 7	136	80	7	T=66 $\pm$ 20% S=118 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 8	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 8	152	96	8	T=72 $\pm$ 20% S=130 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 9	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 9	168	112	9	T=79 $\pm$ 20% S=142 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 10	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 10	184	128	10	T=85 $\pm$ 20% S=152 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 11	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 11	200	144	11	T=92 $\pm$ 20% S=165 $\pm$ 20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Standard, holes: 12	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, стандартная, отверстия: 12	216	160	12	T=98 $\pm$ 20% S=176 $\pm$ 20%

Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 3-12 с шагом 1 / Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 3-12 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм: внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm: outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 3	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 3	61	3	T=40±20% S=72±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 4	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 4	77	4	T=46±20% S=83±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 5	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 5	93	5	T=53±20% S=95±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 6	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 6	109	6	T=59±20% S=106±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 7	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 7	125	7	T=66±20% S=118±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 8	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 8	141	8	T=72±20% S=130±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 9	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 9	157	9	T=79±20% S=142±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 10	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 10	173	10	T=85±20% S=152±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 11	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 11	189	11	T=92±20% S=165±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Standard, holes: 12	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, стандартная, отверстия: 12	205	12	T=98±20% S=176±20%

Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, короткий, отверстия: 3-6 с шагом 1 / Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Short, holes: 3-6 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Short, holes: 3	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, короткий, отверстия: 3	61	3	T=35±20% S=63±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Short, holes: 4	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, короткий, отверстия: 4	77	4	T=41±20% S=74±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Short, holes: 5	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, короткий, отверстия: 5	93	5	T=48±20% S=86±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 130°, Short, holes: 6	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°, короткий, отверстия: 6	109	6	T=54±20% S=97±20%

Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, короткий, отверстия: 3-6 с шагом 1 / Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Short, holes: 3-6 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Short, holes: 3	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, короткий, отверстия: 3	61	3	T=40±20% S=72±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Short, holes: 4	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, короткий, отверстия: 4	77	4	T=46±20% S=83±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Short, holes: 5	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, короткий, отверстия: 5	93	5	T=53±20% S=95±20%
Plate DHS YSQ 36, angle 135°, Short, holes: 6	Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 135°, короткий, отверстия: 6	109	6	T=59±20% S=106±20%

Пластина динамическая компрессионная (DCP) / Plate DCP

Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 4-10 с шагом 1 / Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 4-10 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,5 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Л-З, мм (mm)	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 4	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 4	51	4	T=8.83±20% S=15.3±20%
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 5	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 5	64	5	T=11.09±20% S=19.2±20%
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 6	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 6	77	6	T=13.34±20% S=23.1±20%
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 7	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 7	90	7	T=15.59±20% S=27±20%
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 8	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 8	103	8	T=17.84±20% S=30.9±20%
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 9	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 9	116	9	T=20.1±20% S=34.8±20%
Plate DCP JZQ 08, size 3.5 mm, holes 10	Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 10	129	10	T=22.35±20% S=38.7±20%

Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1 / Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 4-12 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4,5 ± 0,25	11 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 4	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4	69	4	T=15.39±20% S=26.3±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 5	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 5	87	5	T=19.34±20% S=33.76±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 6	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 6	105	6	T=23.41±20% S=40.75±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 7	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 7	123	7	T=27.42±20% S=47.72±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 8	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 8	141	8	T=31.44±20% S=54.7±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 9	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 9	159	9	T=35.45±20% S=61.7±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 10	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 10	177	10	T=39.47±20% S=68.67±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 11	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 11	195	11	T=43.48±20% S=75.66±20%
Plate DCP Narrow JZQ 08, size 4.5 mm, holes 12	Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 12	213	12	T=47.5±20% S=82.64±20%

Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1 / Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 4-12 increments 1

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4,5 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±Z, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 4	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4	69	4	T=16.76±20% S=29.18±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 5	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 5	87	5	T=21.14±20% S=36.8±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 6	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 6	105	6	T=25.51±20% S=44.41±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 7	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 7	123	7	T=29.34±20% S=52.02±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 8	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 8	141	8	T=34.26±20% S=59.64±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 9	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 9	159	9	T=38.63±20% S=67.25±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 10	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 10	177	10	T=43.01±20% S=74.87±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 11	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 11	195	11	T=47.38±20% S=82.48±20%
Plate DCP broad JZQ 08, size 4.5 mm, holes 12	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 12	213	12	T=51.76±20% S=90.1±20%

Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 5-16 с шагом 1, 18 / Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 5-16, increments 1, 18

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4,5 ± 0,25	12 ± 0,25	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	Л-2, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 5	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 5	87	5	T=21.14±20% S=36.8±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 6	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 6	105	6	T=25.51±20% S=44.41±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 7	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 7	123	7	T=29.34±20% S=52.02±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 8	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 8	141	8	T=34.26±20% S=59.64±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 9	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 9	159	9	T=38.63±20% S=67.25±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 10	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 10	177	10	T=43.01±20% S=74.87±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 11	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 11	195	11	T=47.38±20% S=82.48±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 12	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 12	213	12	T=51.76±20% S=90.1±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 13	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 13	231	13	T=56.133±20% S=97.71±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 14	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 14	249	14	T=60.51±20% S=105.32±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 15	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 15	267	15	T=64.88±20% S=112.94±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 16	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 16	285	16	T=69.25±20% S=120.55±20%
Plate DCP Broad Straight ZSQ 03, size 4.5 mm, holes 18	Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 18	303	18	T=73.63±20% S=128.17±20%

Торцевая заглушка ZEQ 01 / End Cap ZEQ 01

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Diameter with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
5 ± 0,1	3,5 ^{+0,15} ₀	T=2.98±20% S=5.2±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина восстанавливающая / Plate Reconstruction


Пластина восстанавливающая таза, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20 / Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 4-12 increments 1, 14, 16, 18, 20

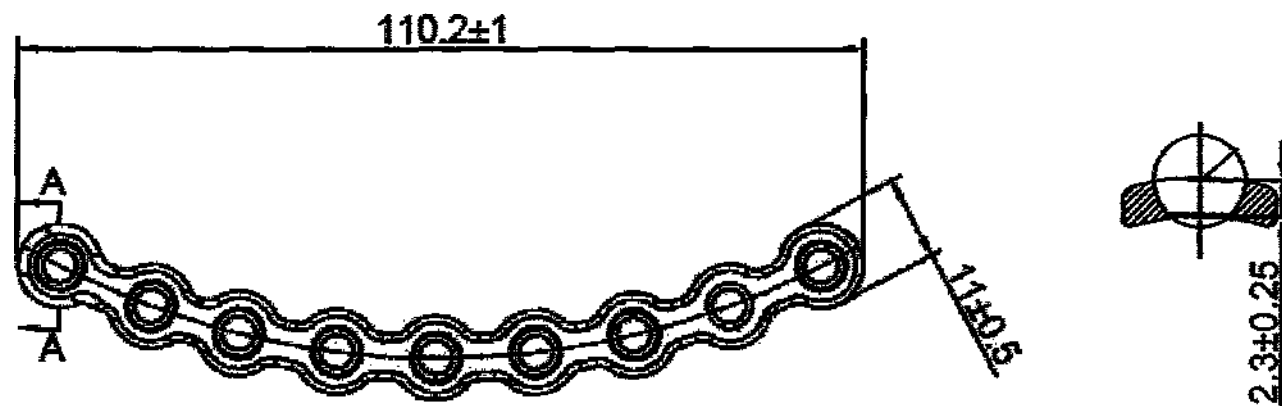

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,3± 0,25	11± 0,5	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	Отверстий (Holes), pcs	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм Plate length with tolerance, mm ± mm	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 4	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 4	4	52±1	T=6.73±20% S=11.74±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 5	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 5	5	65±1	T=8.41±20% S=14.67±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 6	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 6	6	78±1	T=10.09±20% S=17.6±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 7	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 7	7	91±1	T=11.77±20% S=20.54±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 8	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 8	8	104±1	T=13.46±20% S=23.47±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 9	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 9	9	117±1	T=15.14±20% S=26.41±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 10	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 10	10	130±1	T=16.82±20% S=29.34±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 11	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 11	11	143±1	T=18.5±20% S=32.27±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 12	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 12	12	156±1	T=20.18±20% S=35.21±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 14	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 14	14	182±1	T=23.55±20% S=41.08±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 16	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 16	16	208±1	T=26.91±20% S=46.94±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 18	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 18	18	304±1	T=39.33±20% S=68.61±20%
Plate Reconstruction Pelvic curved YSQ 20 size 3.5 mm holes: 20	Пластина восстанавливающая таз, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 20	20	330±1	T=42.68±20% S=74.48±20%

Пластина восстанавливающая подвздошно-крестцовая JZQ 07, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4+4 / Plate Reconstruction Sacroiliac JZQ 07, right/left, size 3.5, holes 4+4

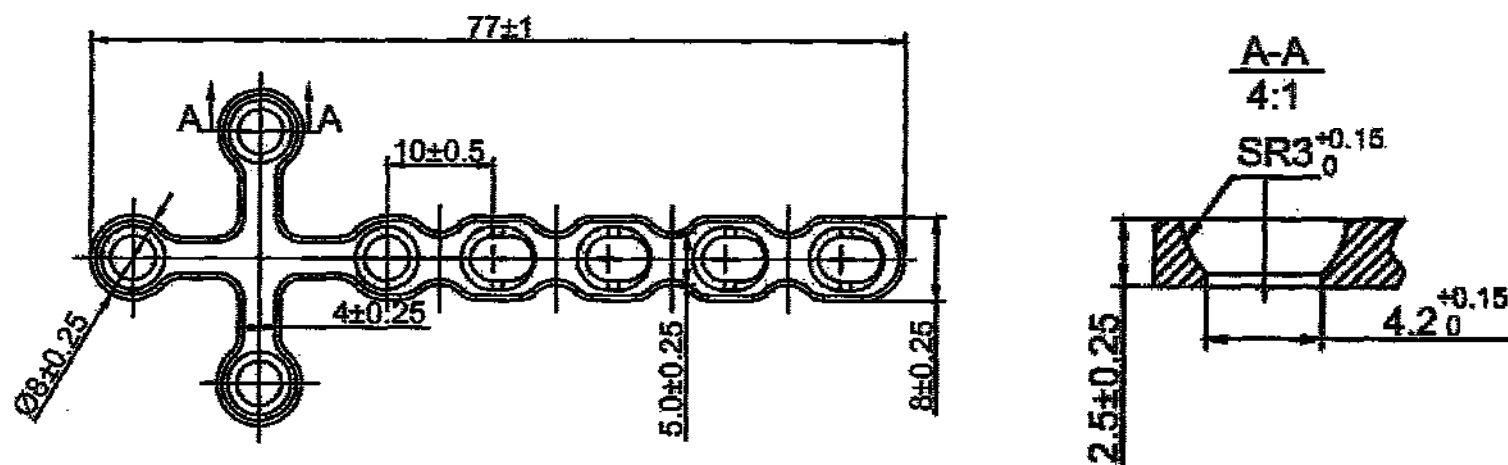

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
10±0,5	77±1	2,5± 0,25	8± 0,25 5± 0,25 4± 0,25	8± 0,25 4,2 ^{+0.15} ₀	3 ^{+0.15} ₀	T=6.93±20% S=12.09±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина восстанавливающая таза, прямая ZE Q 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20 / Plate Reconstruction Pelvic, straight ZE Q 03 size 3.5 mm holes: 4-12 increments 1, 14, 16, 18, 20

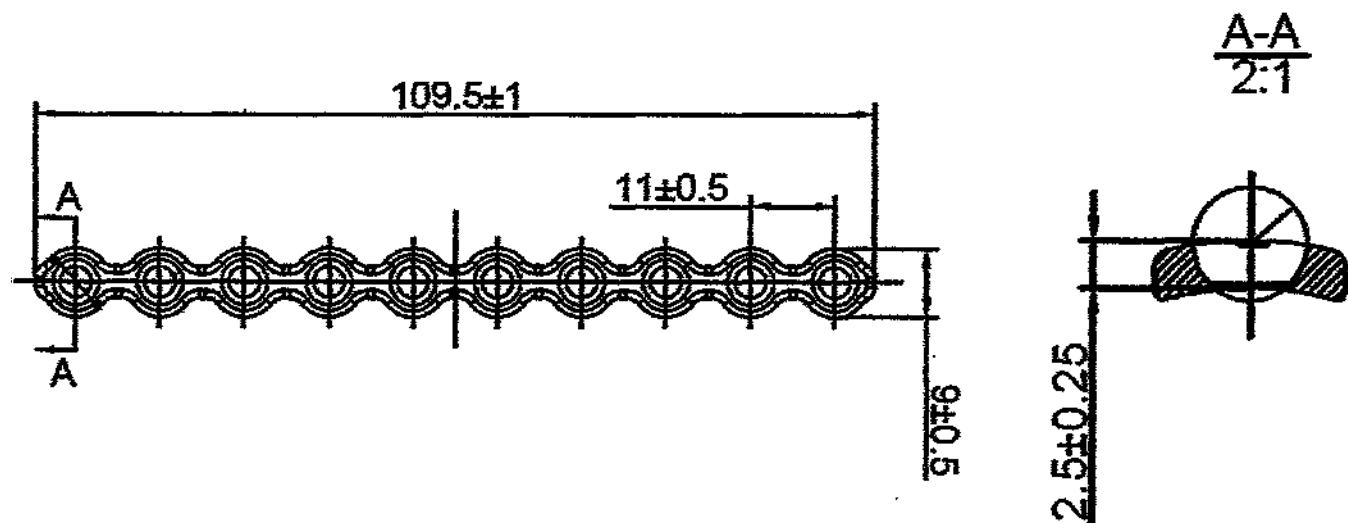


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм Plate width with tolerance, mm ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие Roughness, µm, outside/inner/others
$2,5 \pm 0,25$	$11 \pm 0,5$	$9 \pm 0,5$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм Plate length with tolerance, mm ± mm	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 4	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4	4	47,5±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 5	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5	5	59,75±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 6	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 6	6	72±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 7	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 7	7	84,25±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 8	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 8	8	96,5±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 9	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 9	9	108,75±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 10	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 10	10	121±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 11	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 11	11	133,25±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 12	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 12	12	145,5±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 14	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 14	14	157,75±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 16	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 16	16	170±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 18	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 18	18	182,25±1	T=6.93±20% S=12.09±20%
Plate Reconstruction Pelvic, straight ZEQ 03 size 3.5 mm holes: 20	Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 20	20	194,5±1	T=6.93±20% S=12.09±20%

Пластина лобкового сращения / Plate Pubic Symphysis


Пластина лобкового сращения I, YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия 4, 6, 8 / Plate Pubic Symphysis I, YSQ 20 size 3.5 mm holes 4, 6, 8

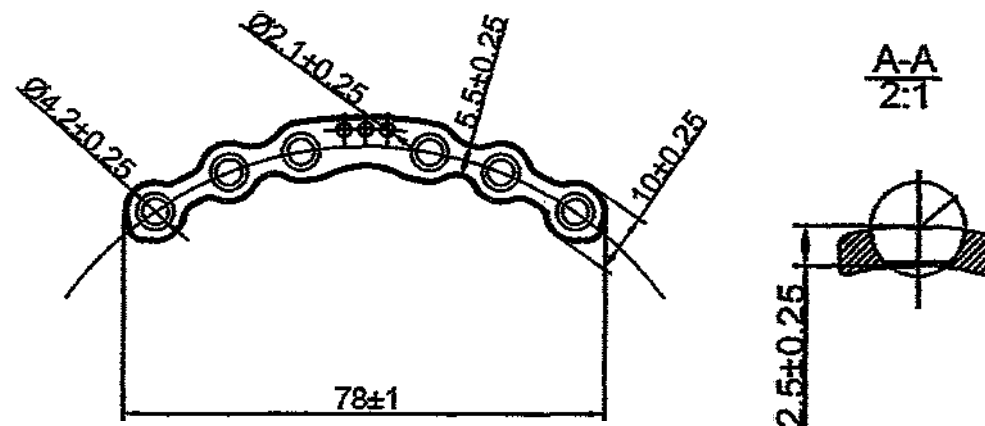

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, mm, outside/inner/others
78±1	2,5± 0,25	4,2± 0,25 2,1±0,25	10± 0,5 5,5±0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	Отверстия (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Pubic Symphysis I, YSQ 20 size 3.5 mm holes 4	Пластина лобкового сращения I, YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия 4	4	T=4.76±20% S=8.3±20%
Plate Pubic Symphysis I, YSQ 20 size 3.5 mm holes 6	Пластина лобкового сращения I, YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия 6	6	T=5.06±20% S=8.83±20%
Plate Pubic Symphysis I, YSQ 20 size 3.5 mm holes 8	Пластина лобкового сращения I, YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия 8	8	T=5.37±20% S=9.36±20%


Пластина лобкового сращения II, YSQ 20 размер 3,5 мм, длина: 19 мм, 22 мм, 25 мм / Plate Pubic Symphysis II, YSQ 20 size 3.5 mm length 19 mm, 22 mm, 25 mm

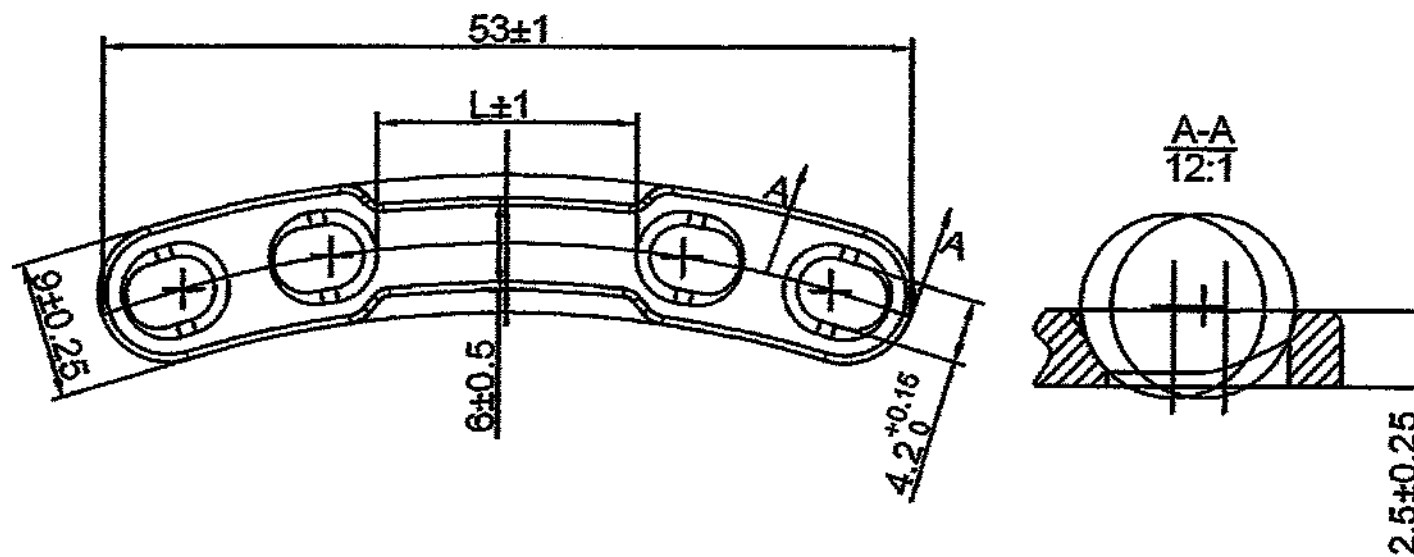

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness μm, outside/inner/others
53±1	2,5± 0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	9± 0,25 6±0,5	0,8 1,6 3,2



Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Pubic Symphysis II, YSQ 20 size 3.5 mm length 19 mm	Пластина лобкового сращения II, YSQ 20 размер 3,5 мм, длина: 19 мм	19	T=1.92±20% S=3.36±20%
Plate Pubic Symphysis II, YSQ 20 size 3.5 mm length 22 mm	Пластина лобкового сращения II, YSQ 20 размер 3,5 мм, длина: 22 мм	22	T=2.23±20% S=3.89±20%
Plate Pubic Symphysis II, YSQ 20 size 3.5 mm length 25 mm	Пластина лобкового сращения II, YSQ 20 размер 3,5 мм, длина: 25 мм	25	T=2.53±20% S=4.42±20%

Пластина крючка для задней стенки вертлужной впадины JZQ 07, размер 3,5 мм, отверстий 3 / Posterior Wall Acetabular Hook Plate JZQ 07, size 3.5 mm, holes 3

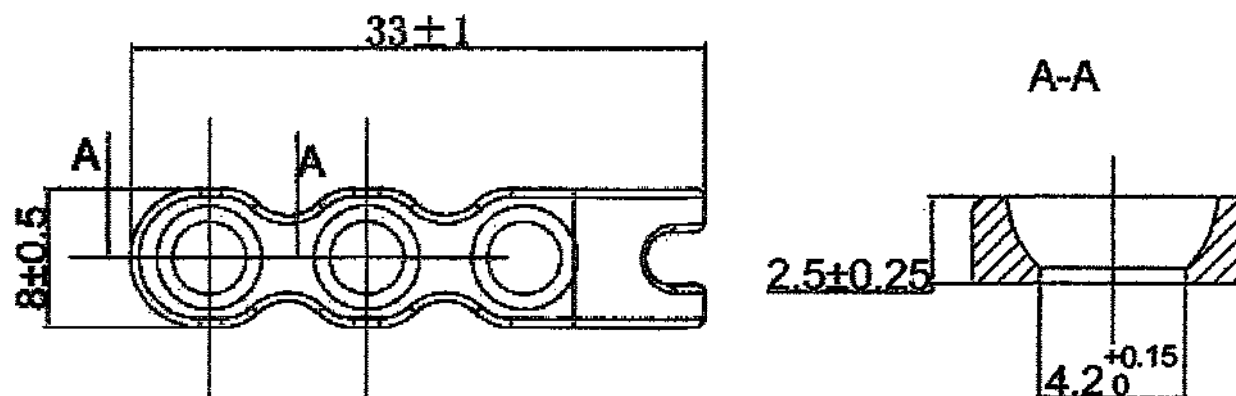


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса пластины с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
33±1	2,5± 0,25	8± 0,5	4,2 ^{+0,15} ₀	T=2.97±20% S=5.18±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина для подвздошного гребня YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстий 6 / Plate for Iiac Crest YSQ 20, size 3.5 mm, holes 6

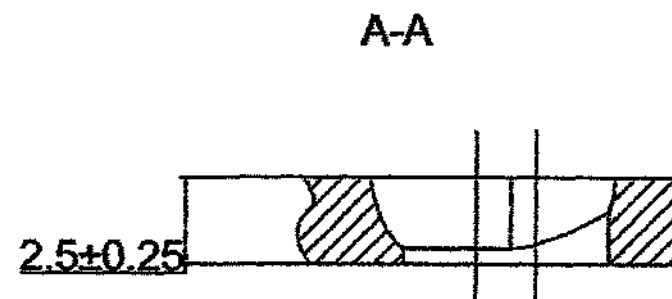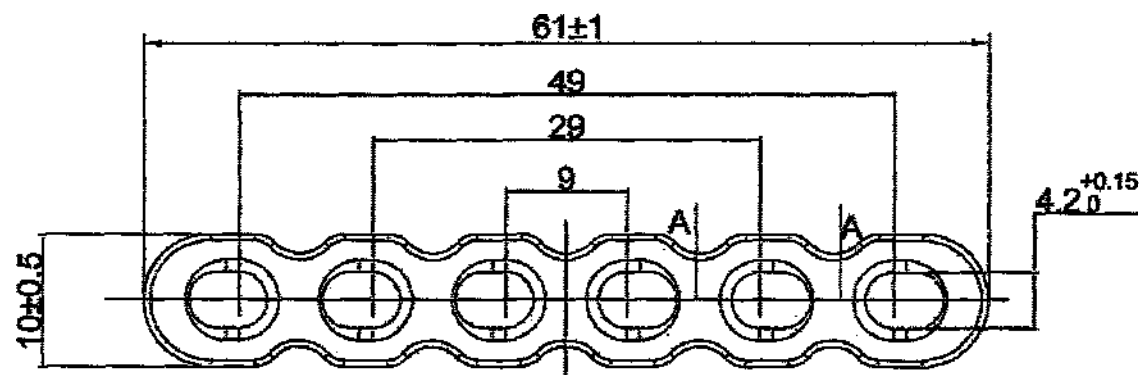

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
61±1	10± 0,5	9±0,5 29±0,5 49±0,5	2,5± 0,25	4,2 ^{+0.15} ₀	T=5.4±20% S=9.42±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина для подвздошного крыла YSQ 16, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 8 / Plate for Ilium Wing YSQ 16, right/left, size 3.5 mm, holes 8

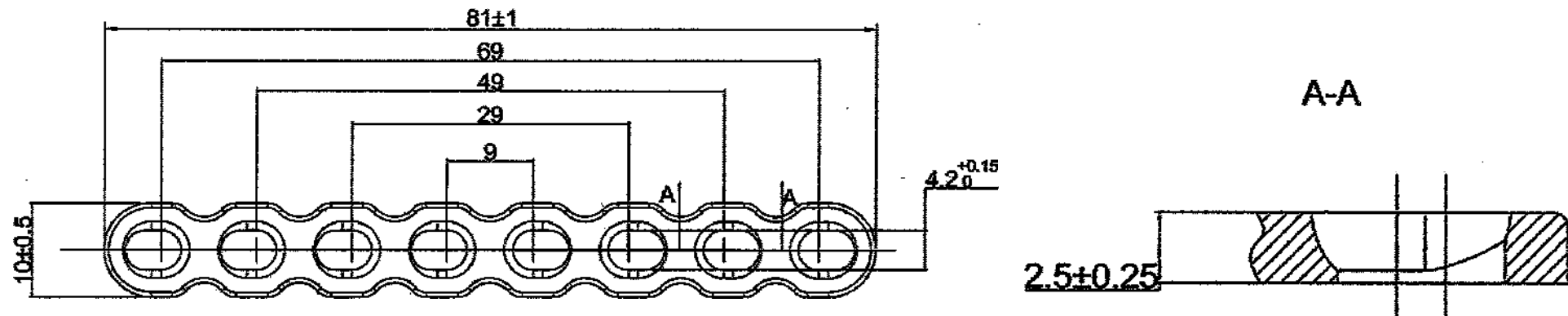

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
81±1	10± 0,5	9±0,5 29±0,5 49±0,5 69±0,5	2,5± 0,25	4,2 ₀ ^{+0.15}	T=9.11±20% S=15.9±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина фрагмента / Plate Fragment

Пластина фрагмента вертлужной впадины с уменьшенной задней стенкой JZQ 06 правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 8+3 / Plate Fragment Acetabular with Posterior Wall Reduction JZQ 06, right/left, size 3.5 mm, holes 8+3

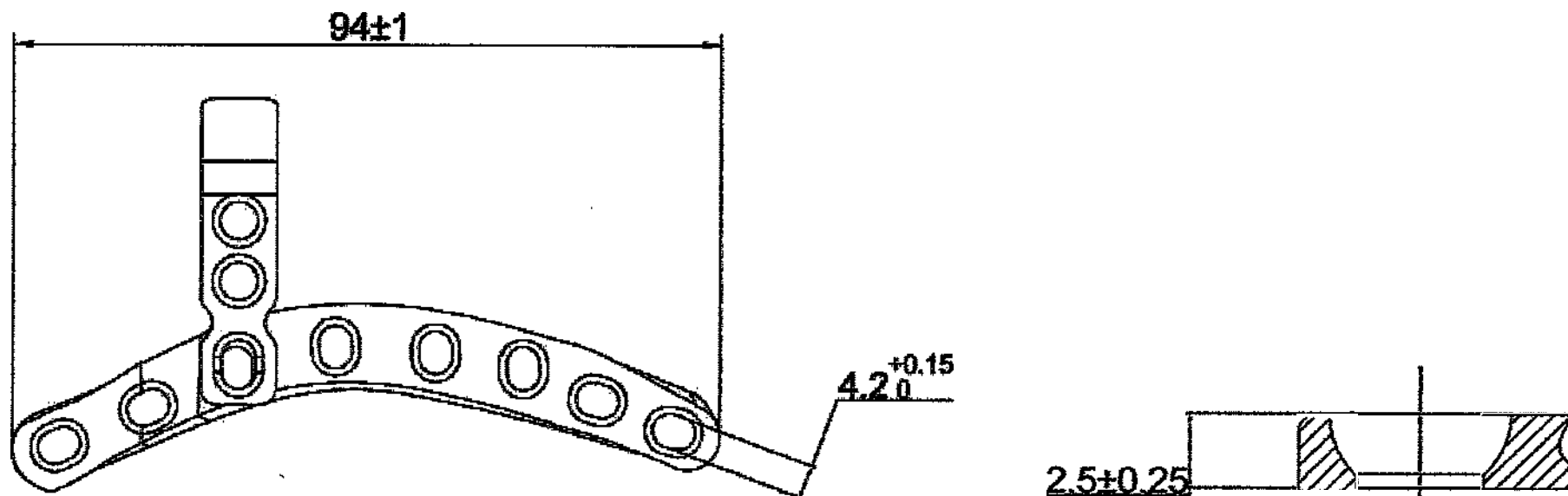


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
94±1	2,5± 0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	T=8.2±20% S=14.31±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фрагмента задней стенки вертлужной впадины JZQ 05 правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6+4 / Plate Fragment Posterior Wall Acetabular JZQ 05, right/left, size 3.5 mm, holes 6+4

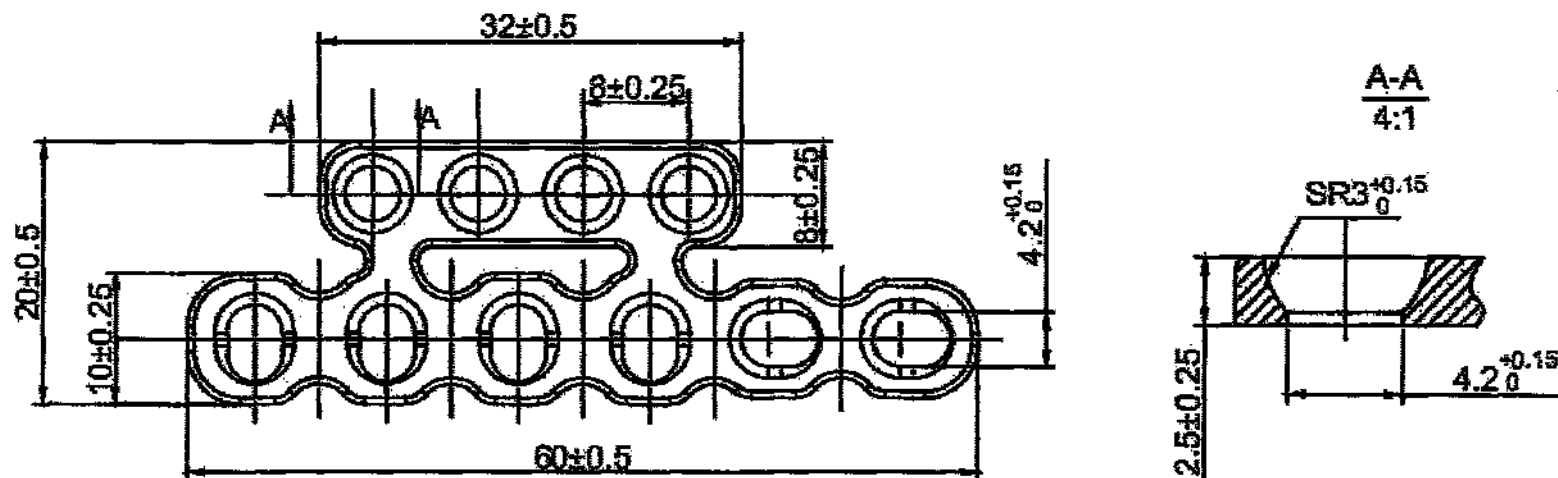


Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, outside/inner/others
8±0,25	60±0,5 32±0,5	2,5± 0,25	20± 0,5 10± 0,25 8± 0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	3 ^{+0,15} ₀	T=13.5±20% S=23.55±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина фрагмента задней стенки вертлужной впадины JZQ 05 правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8+4 / Plate Fragment Posterior Wall Acetabular JZQ 05, right/left, size 3.5 mm, holes 8+4

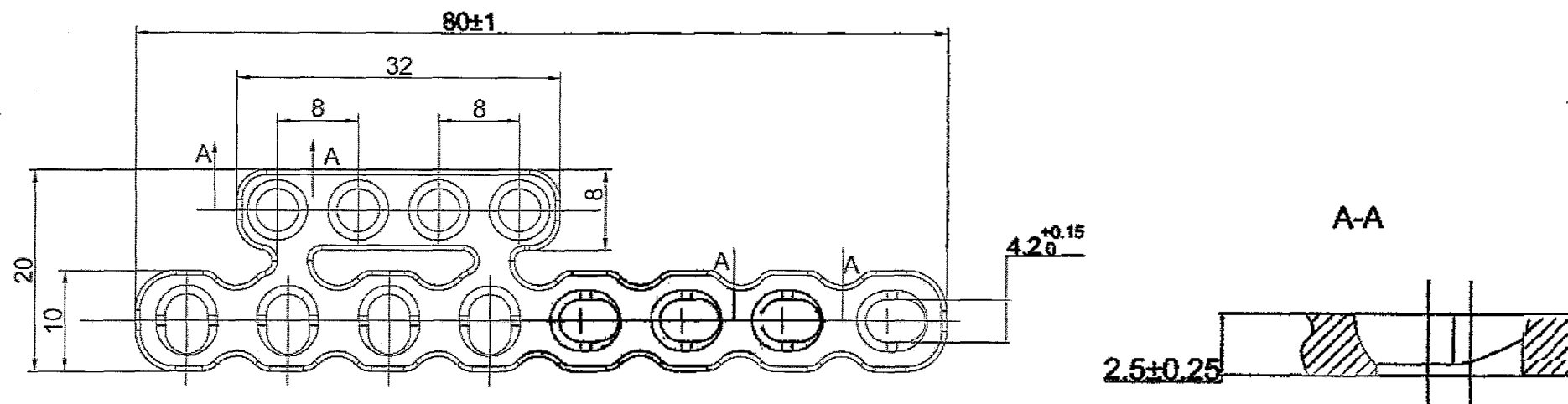

Расстояние между отверстиями с погрешностями, мм ± мм	Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Distance between holes with tolerance, mm ± mm	Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
8±0,25	80±1 32±0,5 8±0,25	2,5±0,25	20±0,5 10±0,25 8±0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	T=14.5±20% S=25.55±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина для крестцово-подвздошного сустава, JZQ 09 размер 3,5 мм, длина 127 мм, 137 мм, 147 мм / Plate Sacroiliac Joint Reduction JZQ 09, size 3.5 mm, length 127 mm, 137 mm, 147 mm

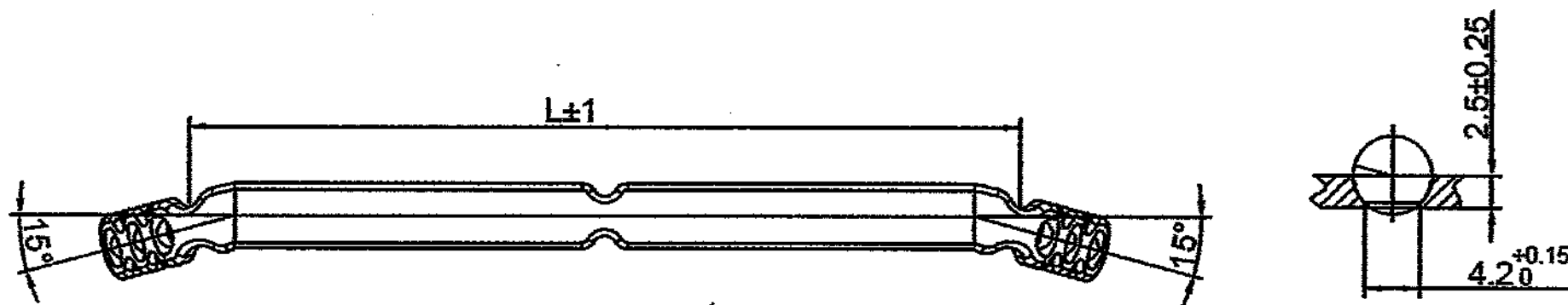


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстий с погрешностями, мм ± мм	Угол, °	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Angle, °	Roughness, µm, outside/inner/others
2,5± 0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	15	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±L mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Sacroiliac Joint Reduction JZQ 09, size 3.5 mm, length 127 mm	Пластина для крестцово-подвздошного сустава, JZQ 09 размер 3,5 мм, длина 127 мм	127	T=23.63±20% S=41.21±20%
Plate Sacroiliac Joint Reduction JZQ 09, size 3.5 mm, length 137 mm	Пластина для крестцово-подвздошного сустава, JZQ 09 размер 3,5 мм, длина 137 мм	137	T=24.75±20% S=43.18±20%
Plate Sacroiliac Joint Reduction JZQ 09, size 3.5 mm, length 147 mm	Пластина для крестцово-подвздошного сустава, JZQ 09 размер 3,5 мм, длина 147 мм	147	T=25.88±20% S=45.14±20%


Пластина для вертлужного / Plate for Acetabular

Пластина для вертлужного заднего столба с двумя 2 усиленными крыльями JZQ 02, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8+2+2 / Plate for Acetabular Posterior Column with 2 Reinforced Wings JZQ 02 right/left, size 3.5 mm, holes 8+2+2

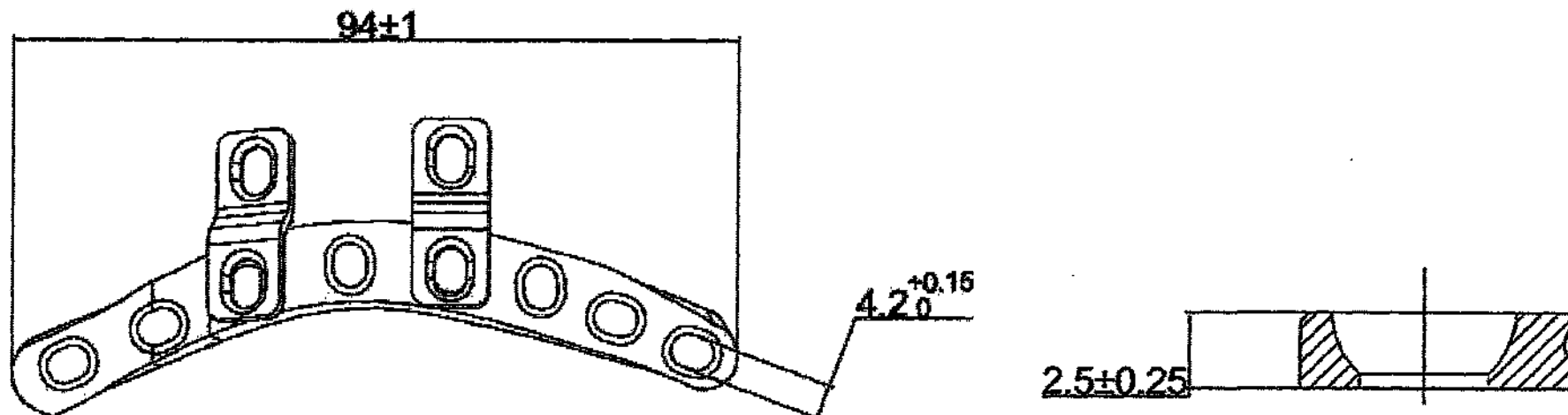


Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешний/внутренний/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
94±1	2,5± 0,25	4,2 ^{+0,15} ₀	T=9.11±20% S=15.9±20%	0,8 1,6 3,2

Пластина для вертлужного переднего столба с дополнительным крылом JZQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 11+1 / Plate for Acetabular Anterior Column with Auxiliary Wing JZQ 06, right/left, size 3.5 mm, holes 11+1

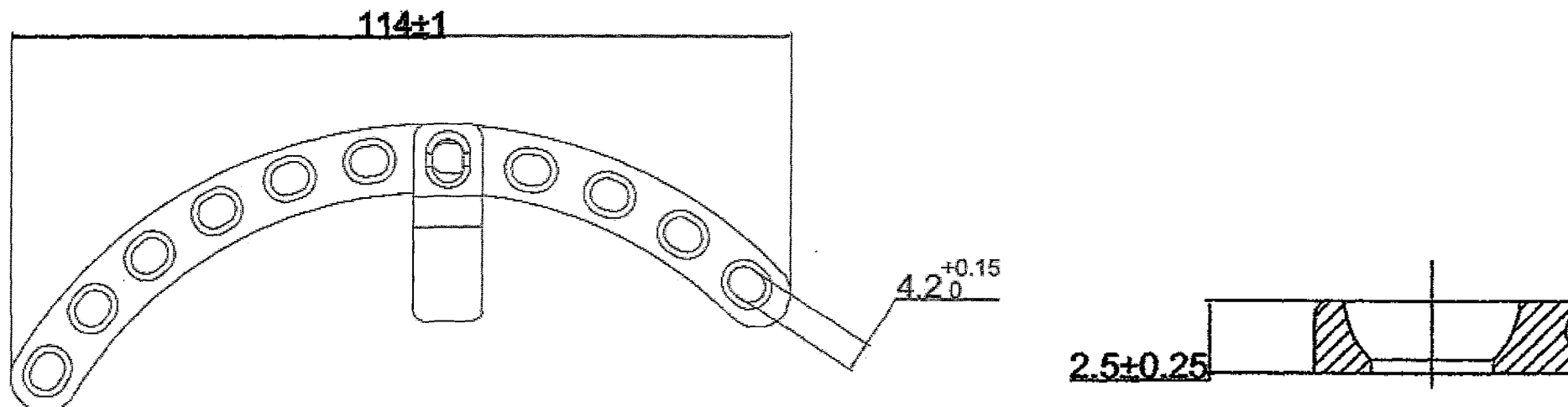

Длина пластины с погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate length with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, outside/inner/others
114±1	2,5± 0,25	4,2 ^{+0.15} ₀	T=12.6±20% S=21.98±20%	0,8 1,6 3,2


Пластина V-образная двусторонняя для вертлужного переднего столба JZQ 08, размер 3,5 мм, длина: 19 мм, 22 мм, 25 мм / V-Plate Bilaterally Anterior Column Acetabular, JZQ 08 size 3.5 mm, length 19 mm, 22 mm, 25 mm

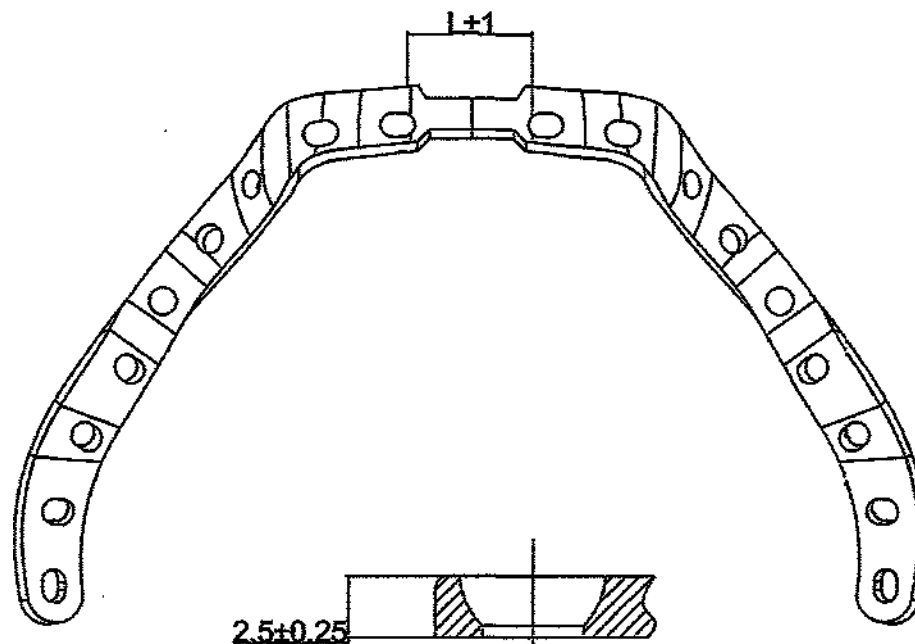

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,5± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
V-Plate Bilaterally Anterior Column Acetabular, JZQ 08 size 3.5 mm, length 19 mm	Пластина V-образная двусторонняя для вертлужного переднего столба JZQ 08, размер 3,5 мм, длина: 19 мм	19	T=20.25±20% S=35.33±20%
V-Plate Bilaterally Anterior Column Acetabular, JZQ 08 size 3.5 mm, length 22 mm	Пластина V-образная двусторонняя для вертлужного переднего столба JZQ 08, размер 3,5 мм, длина: 22 мм	22	T=20.67±20% S=36.06±20%
V-Plate Bilaterally Anterior Column Acetabular, JZQ 08 size 3.5 mm, length 25 mm	Пластина V-образная двусторонняя для вертлужного переднего столба JZQ 08, размер 3,5 мм, длина: 25 мм	25	T=21.09±20% S=36.8±20%

Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 24 мм, 18 X 26 мм, 18 X 28 мм, 18 X 30 мм / Plate Superior Sacroiliac JZQ 09, size 3.5 mm, holes size: 18 X 24 mm, 18 X 26 mm, 18 X 28 mm, 18 X 30 mm

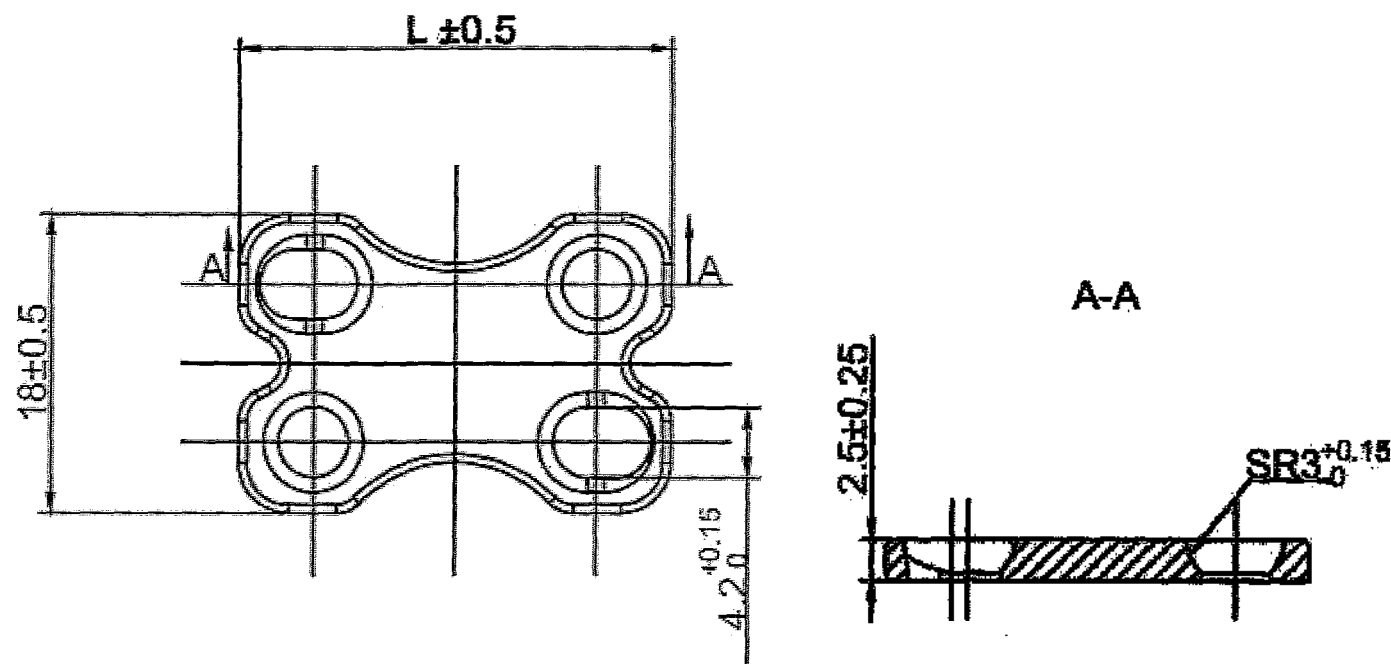


Толщина пластины погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, µm, outside/inner/others
2,5 ± 0,25	18 ± 0,5	4,2 ^{+0.15} ₀	3 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Superior Sacroiliac JZQ 09, size 3.5 mm, holes size: 18 X 24 mm	Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 24 мм	24	T=4.86±20% S=8.48±20%
Plate Superior Sacroiliac JZQ 09, size 3.5 mm, holes size: 18 X 26 mm	Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 26 мм	26	T=5.27±20% S=9.18±20%
Plate Superior Sacroiliac JZQ 09, size 3.5 mm, holes size: 18 X 28 mm	Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 28 мм	28	T=5.67±20% S=9.89±20%
Plate Superior Sacroiliac JZQ 09, size 3.5 mm, holes size: 18 X 30 mm	Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 30 мм	30	T=6.08±20% S=10.6±20%

Пластина для управления ростом / Plate for Guided Growth


Пластина для управления ростом JZQ 01 в форме восьмерки, длина: 12 мм, 16мм / Plate for Guided Growth JZQ 01 eight, length: 12 mm, 16mm

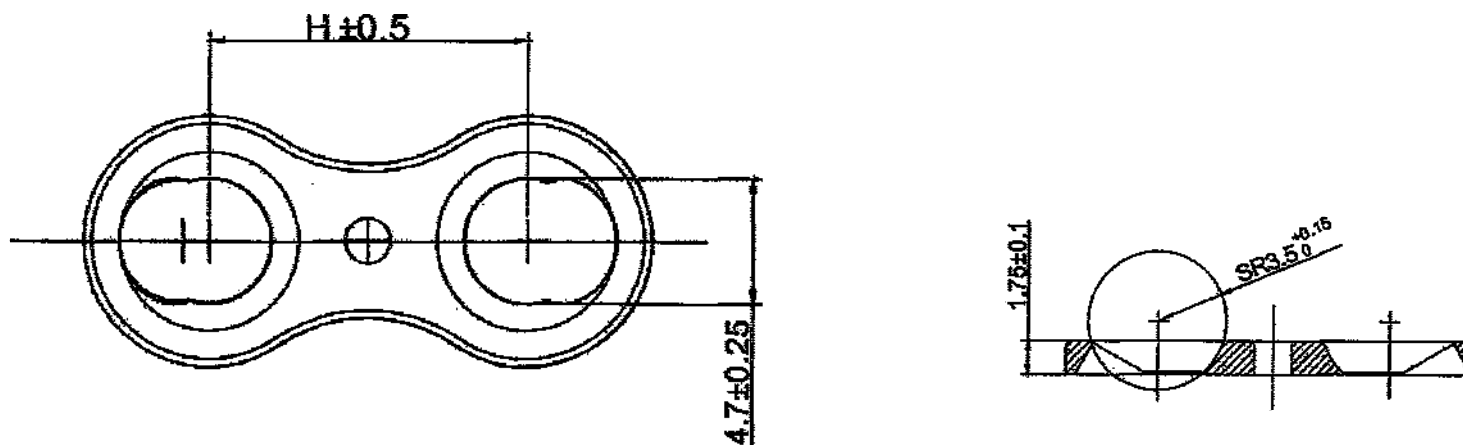

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус сферы	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Hole radius	Roughness, μm, outside/inner/others
1,75± 0,1	4,7± 0,25	3,5 ₀ ^{+0.15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate for Guided Growth JZQ 01 eight, length: 12 mm	Пластина для управления ростом JZQ 01 в форме восьмерки, длина: 12 мм	12	T=1.57±20% S=2.741±20%
Plate for Guided Growth JZQ 01 eight, length: 16mm	Пластина для управления ростом JZQ 01 в форме восьмерки, длина: 16мм	16	T=2.17±20% S=3.781±20%


Пластина для управления ростом YSQ 01 в форме квадрата, длина: 16 мм, 22мм / Plate for Guided Growth YSQ 01 quad, length: 16 mm, 22mm

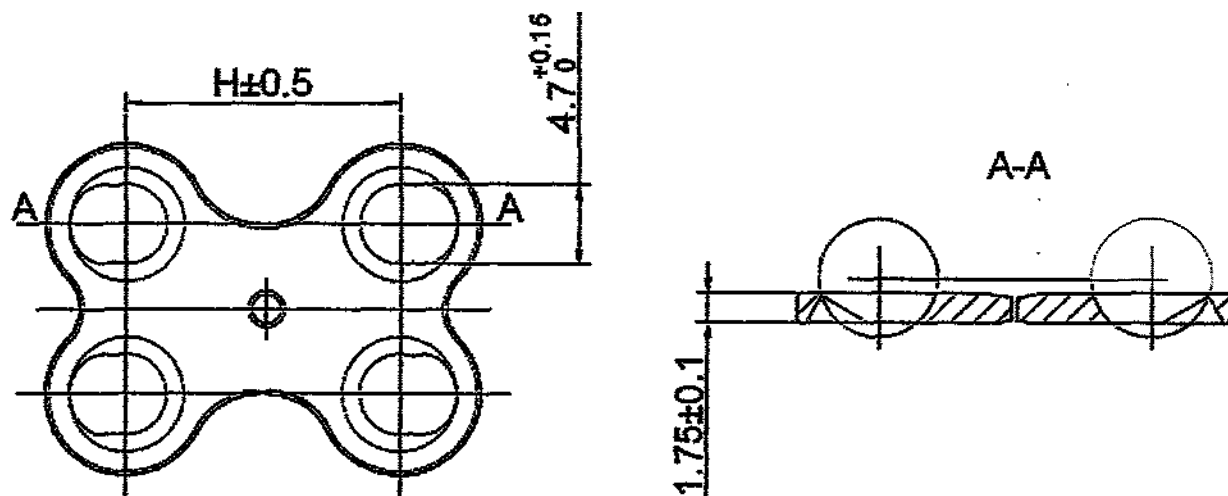

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,75 ± 0,1	4,7 ₀ ^{+0.15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	H±0.5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate for Guided Growth YSQ 01 quad, length: 16 mm	Пластина для управления ростом YSQ 01 в форме квадрата, длина: 16 мм	16	T=1.57±20% S=2.741±20%
Plate for Guided Growth YSQ 01 quad, length: 22 mm	Пластина для управления ростом YSQ 01 в форме квадрата, длина: 22 мм	22	T=2.17±20% S=3.781±20%

Пластина прямая черепная ZEQ 01, размер 1,5 мм, отверстия: 2, 4 / Cranial Straight Plate ZEQ 01 size 1.5 mm, holes: 2, 4


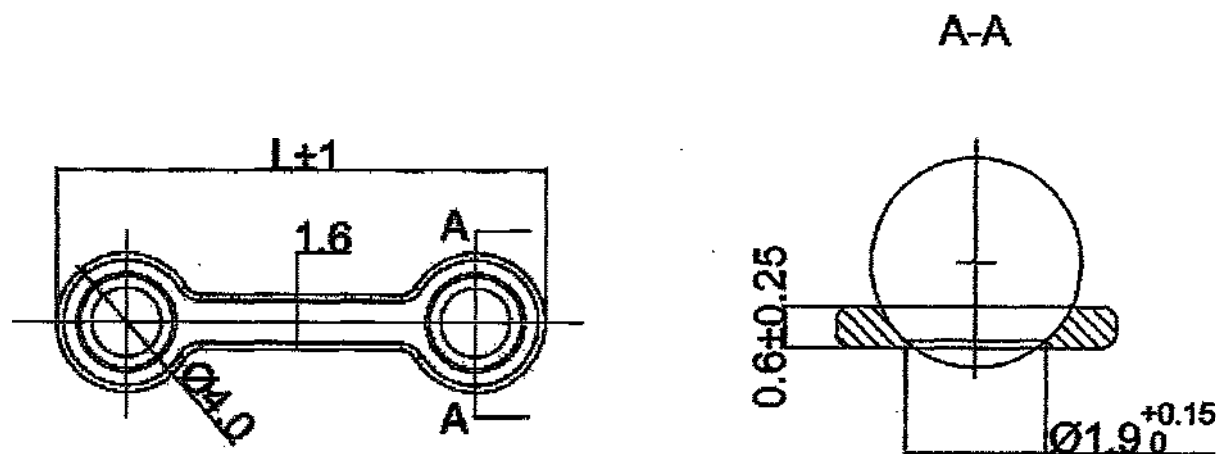


Ширина пластины погрешностями, мм ± мм	Толщина пластины погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
1,6 ± 0,25	0,6 ± 0,25	1,9 ^{+0.15} ₀ 4±0,5	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт. (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Cranial Straight Plate ZEQ 01 size 1.5 mm, holes: 2	Пластина прямая черепная ZEQ 01, размер 1,5 мм, отверстия: 2	14	2	T=0.15±20% S=0.26±20%
Cranial Straight Plate ZEQ 01 size 1.5 mm, holes: 4	Пластина прямая черепная ZEQ 01, размер 1,5 мм, отверстия: 4	23	4	T=0.25±20% S=0.43±20%

Пластина с петлевым механизмом / Plate with Hinge


Пластина с петлевым механизмом JZQ 01, размер 12 мм, 16 мм, 20 мм / Plate with Hinge JZQ 01, size 12 mm, 16 mm, 20 mm

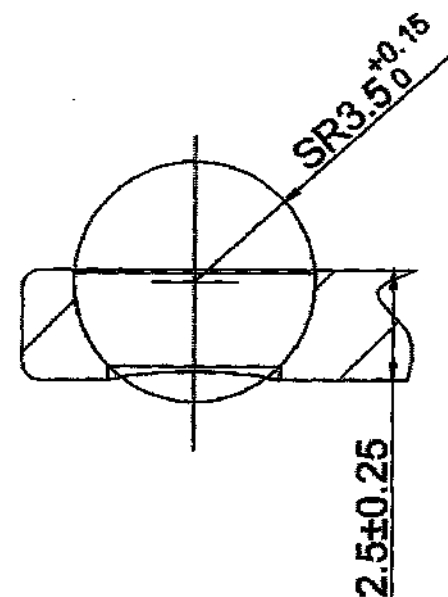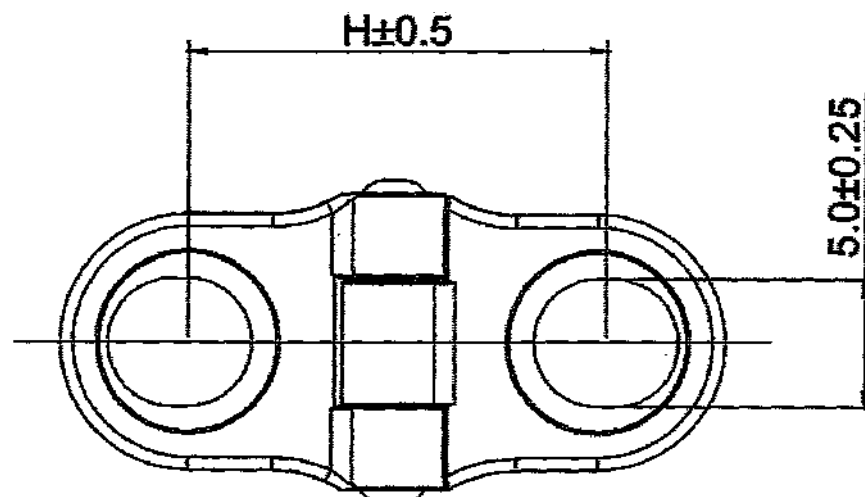

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Радиус с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Radius with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
2,5± 0,25	5,0± 0,25	3,5 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	H ±0.5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Plate with Hinge JZQ 01, size 12 mm	Пластина с петлевым механизмом JZQ 01, размер 12 мм	12	T=2.3±20% S=4.011±20%
Plate with Hinge JZQ 01, size 16 mm	Пластина с петлевым механизмом JZQ 01, размер 16 мм	16	T=2.71±20% S=4.74±20%
Plate with Hinge JZQ 01, size 20 mm	Пластина с петлевым механизмом JZQ 01, размер 20 мм	20	T=3.13±20% S=5.461±20%

Пластина с петлевым механизмом в форме бабочки YSQ 01, размер 16 мм, 22 мм / Plate with Hinge Quad YSQ 01, size 16 mm, 22 mm

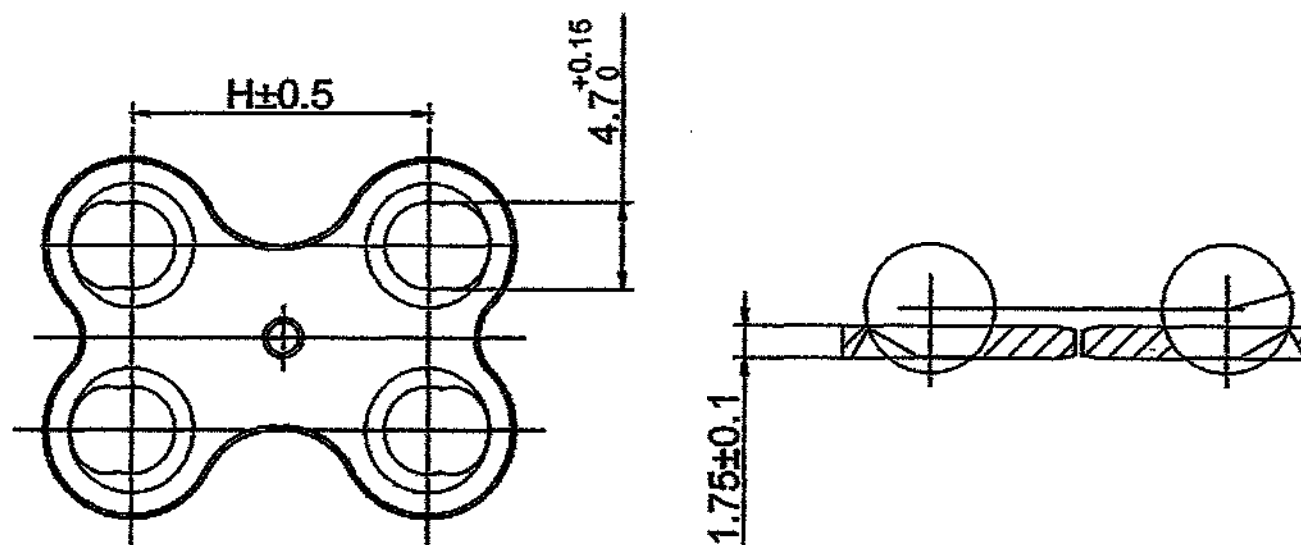

Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстий с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Hole diameter with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
1,75±0,1	4,7 ₀ ^{+0,15}	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	H ± 0.5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate with Hinge Quad YSQ 01, size 16 mm	Пластина с петлевым механизмом в форме бабочки YSQ 01, размер 16 мм	16	T=4.1±20% S=7.141±20%
Plate with Hinge Quad YSQ 01, size 22 mm	Пластина с петлевым механизмом в форме бабочки YSQ 01, размер 22 мм	22	T=5.04±20% S=8.79±20%

Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 3-12 с шагом 1, 14-20 с шагом 2 / Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 3-12 increments 1, 14-20 increments 2

Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Roughness, µm, outside/inner/others
4 ± 0,25	6 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 3	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 3	37	3	T=3.99±20% S=6.97±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 4	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 4	49	4	T=5.29±20% S=9.23±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 5	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 5	61	5	T=6.58±20% S=11.49±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 6	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 6	73	6	T=7.88±20% S=13.75±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 7	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 7	85	7	T=9.18±20% S=16.01±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 8	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 8	97	8	T=10.47±20% S=18.27±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 9	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 9	109	9	T=11.77±20% S=20.53±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 10	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 10	121	10	T=13.07±20% S=22.79±20%

Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 11	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 11	133	11	T=14.36±20% S=25.05±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 12	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 12	145	12	T=15.66±20% S=27.31±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 14	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 14	157	14	T=16.95±20% S=29.58±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 16	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 16	169	16	T=18.25±20% S=31.83±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 18	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 18	181	18	T=19.54±20% S=34.1±20%
Plate for Acetubular FX JZQ 07, holes: 20	Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 20	193	20	T=20.84±20% S=36.36±20%

Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 8-11 с шагом 1 / Plate in shape of Cobra Head JZQ 05 holes: 8-11 increments 1

Ширина пластины с погрешностями, мм ± mm	Толщина пластины с погрешностями, мм ± mm	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate width with tolerance, mm ± mm	Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
5 ± 0,25	8,8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± l, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Plate in shape of Cobra Head JZQ 05 holes: 8	Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 8	146	8	T=28.9±20% S=50.428±20%
Plate in shape of Cobra Head JZQ 05 holes: 9	Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 9	158	9	T=31.28±20% S=54.57±20%
Plate in shape of Cobra Head JZQ 05 holes: 10	Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 10	180	10	T=33.63±20% S=58.71±20%
Plate in shape of Cobra Head JZQ 05 holes: 11	Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 11	182	11	T=36.03±20% S=62.86±20%

Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4, 6, 9, 12 длина стержня: 54 мм, 80 мм, 119 мм, 258 мм, длина клинка: 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм / Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 4, 6, 9, 12 Shaft Length: 54 mm, 80 mm, 119 mm, 258 mm, Blade Length: 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm


Толщина пластины с погрешностями, мм ± мм	Ширина пластины с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, внешняя/внутренняя/другие
Plate thickness with tolerance, mm ± mm	Plate width with tolerance, mm ± mm	Roughness, μm, outside/inner/others
3,6 ± 0,25	18 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, мм (mm)	L2 ±1, мм (mm)	Отверстий (Holes), шт (pcs)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 4, Shaft Length: 54 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4, длина стержня: 54 мм, длина клинка: 60 мм	60	54	4	T=33.24±20% S=57.91±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 4, Shaft Length: 54 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4, длина стержня: 54 мм, длина клинка: 70 мм	70	54	4	T=36.15±20% S=62.99±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 4, Shaft Length: 54 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4, длина стержня: 54 мм, длина клинка: 80 мм	80	54	4	T=39.07±20% S=68.07±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 4, Shaft Length: 54 mm, Blade Length: 90 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4, длина стержня: 54 мм, длина клинка: 90 мм	90	54	4	T=41.99±20% S=73.15±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 6, Shaft Length: 80 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 6, длина стержня: 80 мм, длина клинка: 60 мм	60	80	6	T=40.82±20% S=71.12±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 6, Shaft Length: 80 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 6, длина стержня: 80 мм, длина клинка: 70 мм	70	80	6	T=43.74±20% S=76.2±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 5, Shaft Length: 80 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 6, длина стержня: 80 мм, длина клинка: 80 мм	80	80	6	T=46.65±20% S=81.28±20%

Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 5, Shaft Length: 80 mm, Blade Length: 90 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 6, длина стержня: 80 мм, длина клинка: 90 мм	90	80	6	T=49.57±20% S=86.36±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 9, Shaft Length: 119 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 9, длина стержня: 119 мм, длина клинка: 60 мм	60	119	9	T=52.19±20% S=90.93±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 9, Shaft Length: 119 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 9, длина стержня: 119 мм, длина клинка: 70 мм	70	119	9	T=55.11±20% S=96.01±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 9, Shaft Length: 119 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 9, длина стержня: 119 мм, длина клинка: 80 мм	80	119	9	T=58.02±20% S=101.09±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 9, Shaft Length: 119 mm, Blade Length: 90 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 9, длина стержня: 119 мм, длина клинка: 90 мм	90	119	9	T=60.94±20% S=106.17±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 12, Shaft Length: 258 mm, Blade Length: 60 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 12, длина стержня: 258 мм, длина клинка: 60 мм	60	258	12	T=92.72±20% S=161.54±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 12, Shaft Length: 258 mm, Blade Length: 70 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 12, длина стержня: 258 мм, длина клинка: 70 мм	70	258	12	T=95.64±20% S=166.62±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 12, Shaft Length: 258 mm, Blade Length: 80 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 12, длина стержня: 258 мм, длина клинка: 80 мм	80	258	12	T=98.56±20% S=171.22±20%
Plate Angled Blade, 130°, YSQ 36 holes 12, Shaft Length: 258 mm, Blade Length: 90 mm	Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 12, длина стержня: 258 мм, длина клинка: 90 мм	90	258	12	T=101.47±20% S=176.78±20%

Винт фиксирующий / Screw Locking

Винт фиксирующий НАQ06 2,0 мм, длина: 6-40 мм с шагом 2 мм / Screw Locking НАQ06 2.0 mm, length: 6-40 mm increments 2 mm

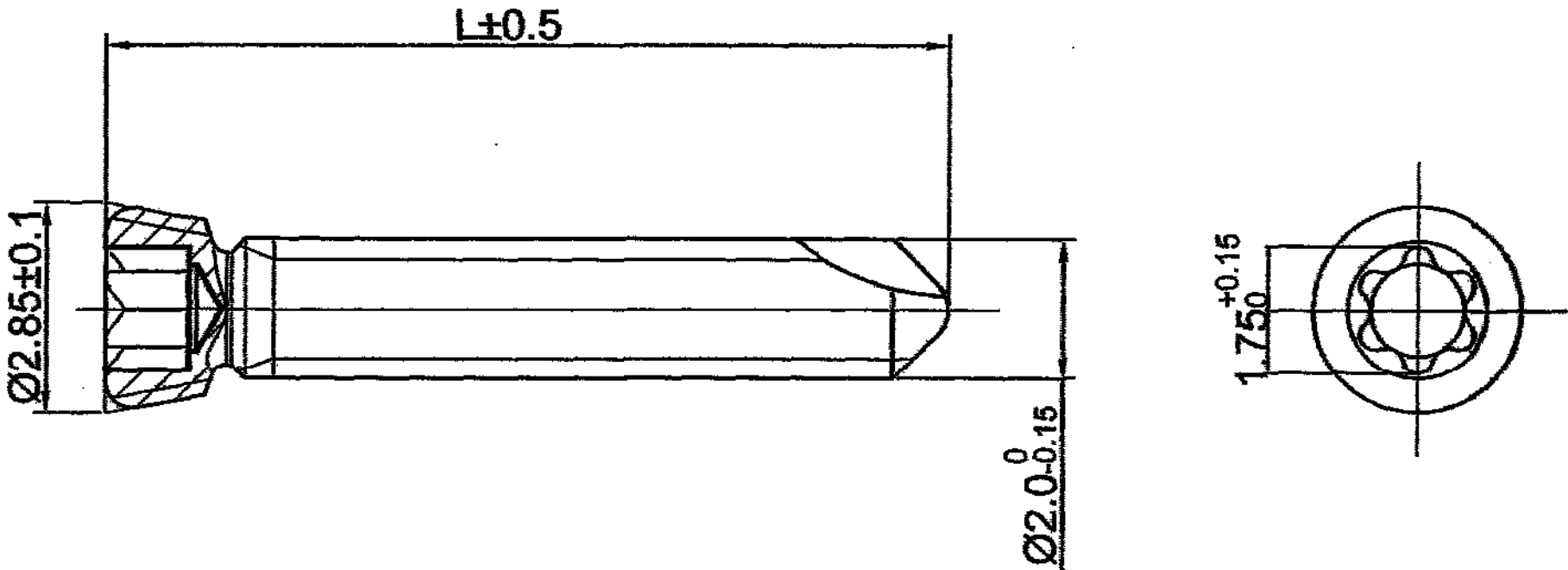


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm: not more
$2 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$	2.85 ± 0.1	$1.75 \begin{smallmatrix} +0.15 \\ 0 \end{smallmatrix}$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L, ±0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, g ± g Mass with tolerances, g ± g
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 6 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 6 mm	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 8 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 8 mm	8	T=0.07±20% S=0.12±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 10 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 10 mm	10	T=0.09±20% S=0.16±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 12 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 12 mm	12	T=0.11±20% S=0.19±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 14 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 14 mm	14	T=0.12±20% S=0.21±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 16 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 16 mm	16	T=0.14±20% S=0.25±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 18 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 18 mm	18	T=0.16±20% S=0.28±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 20 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 20 mm	20	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 22 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 22 mm	22	T=0.2±20% S=0.35±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 24 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 24 mm	24	T=0.21±20% S=0.36±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 26 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 26 mm	26	T=0.23±20% S=0.41±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 28 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 28 mm	28	T=0.25±20% S=0.44±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 30 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 30 mm	30	T=0.27±20% S=0.48±20%

Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 32 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 32 mm	32	T=0.29±20% S=0.52±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 34 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 34 mm	34	T=0.3±20% S=0.54±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 36 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 36 mm	36	T=0.32±20% S=0.57±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 38 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 38 mm	38	T=0.34±20% S=0.61±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,0 мм, длина: 40 мм	Screw Locking HAQ06 2.0 mm, length: 40 mm	40	T=0.36±20% S=0.64±20%

Винт фиксирующий НАQ06 2,4 мм, длина: 6-50 мм с шагом 2 мм / Screw Locking НАQ06 2.4 mm, length: 6-50 mm increments 2 mm

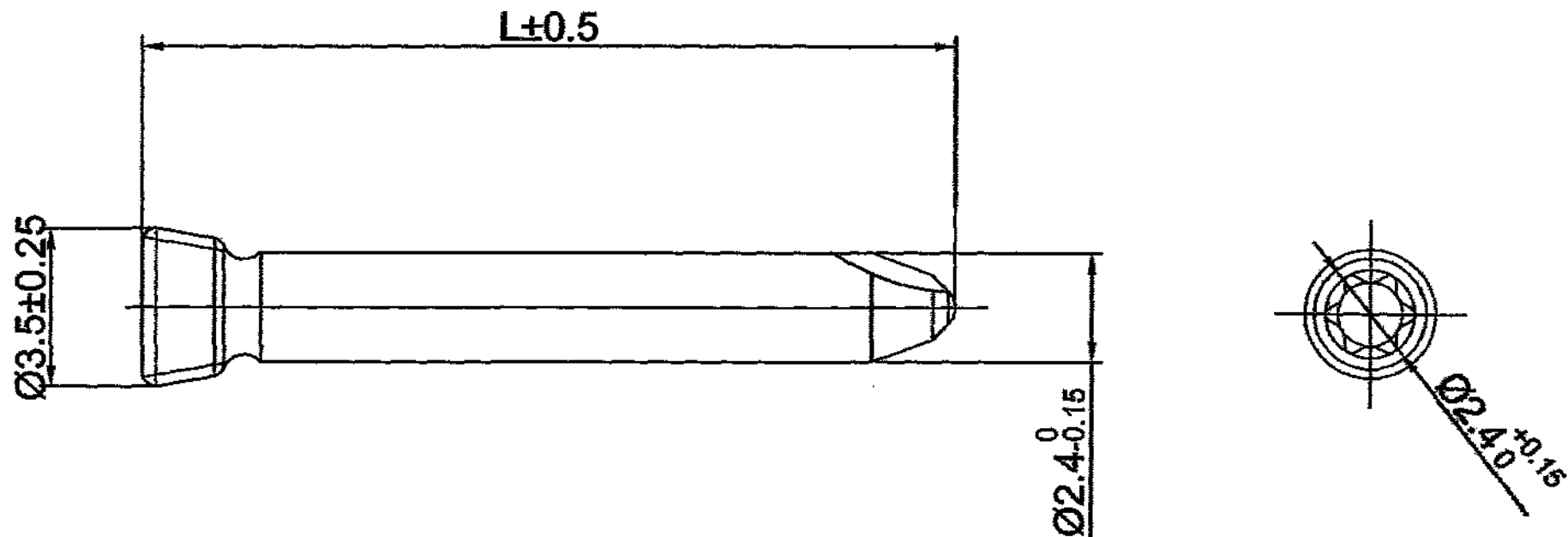


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
$2,4^{+0}_{-0.15}$	$3,5 \pm 0,25$	$2,4^{+0}_{-0.15}$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	$L \pm 0.5 \text{ mm (mm)}$	Масса с погрешностями, $g \pm g$ Mass with tolerances, $g \pm g$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 6 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 6 mm	6	$T=0.09 \pm 20\%$ $S=0.16 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 8 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 8 mm	8	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.21 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 10 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 10 mm	10	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.26 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 12 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 12 mm	12	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 14 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 14 mm	14	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 16 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 16 mm	16	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.41 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 18 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 18 mm	18	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.46 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 20 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 20 mm	20	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.52 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 22 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 22 mm	22	$T=0.32 \pm 20\%$ $S=0.57 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 24 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 24 mm	24	$T=0.35 \pm 20\%$ $S=0.62 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 26 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 26 mm	26	$T=0.38 \pm 20\%$ $S=0.68 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 28 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 28 mm	28	$T=0.41 \pm 20\%$ $S=0.73 \pm 20\%$
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 30 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 30 mm	30	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$

Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 32 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 32 mm	32	T=0.47±20% S=0.84±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 34 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 34 mm	34	T=0.5±20% S=0.89±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 36 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 36 mm	36	T=0.53±20% S=0.95±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 38 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 38 mm	38	T=0.56±20% S=1.0±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 40 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 40 mm	40	T=0.58±20% S=1.04±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 42 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 42 mm	42	T=0.61±20% S=1.09±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 44 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 44 mm	44	T=0.64±20% S=1.15±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 46 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 46 mm	46	T=0.67±20% S=1.2±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 48 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 48 mm	48	T=0.7±20% S=1.25±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,4 мм, длина: 50 мм	Screw Locking HAQ06 2.4 mm, length: 50 mm	50	T=0.73±20% S=1.31±20%


Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм / Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 6-30 mm increments 2 mm

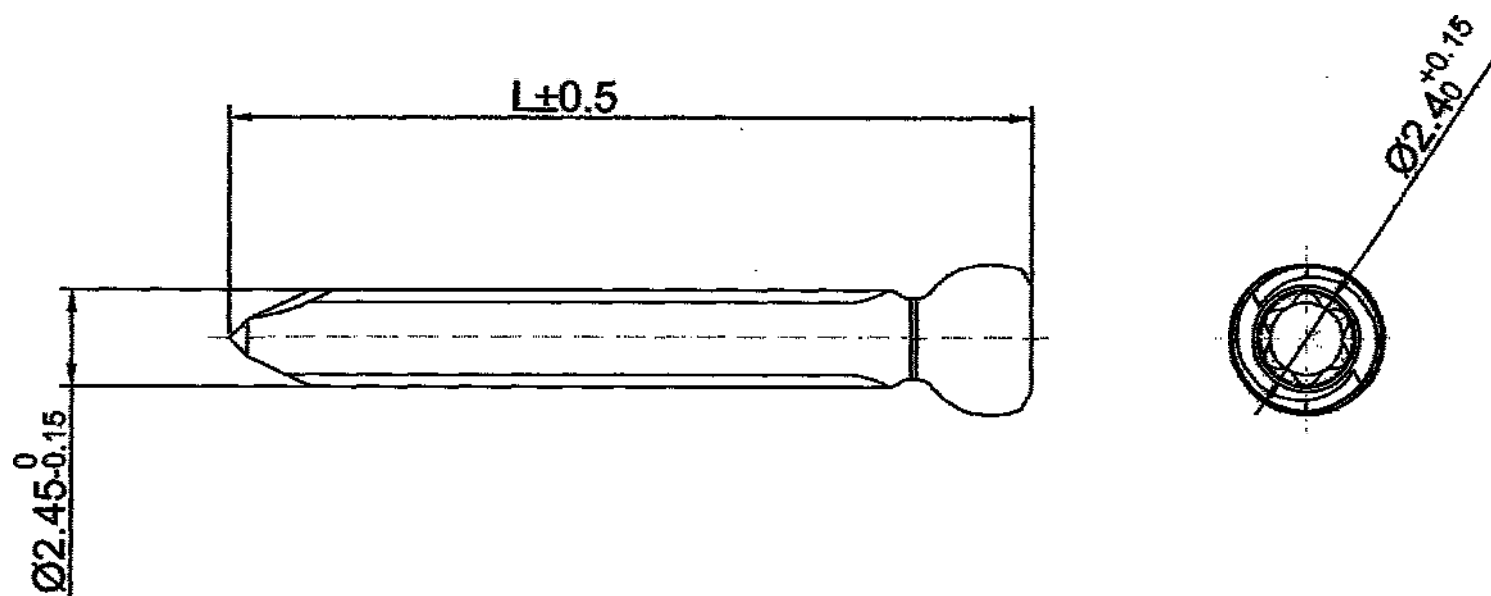

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, µm, not more
$2.45^{+0}_{-0.15}$	$2.4^{+0.15}_0$	1,6 3,2

Описание	Description	$l \pm 0.5 \text{ mm (mm)}$	Масса с погрешностями, $g \pm g$ Mass with tolerances, $g \pm g$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 6 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 6 mm	6	$T=0.09 \pm 20\%$ $S=0.16 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 8 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 8 mm	8	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.21 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 10 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 10 mm	10	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.26 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 12 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 12 mm	12	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 14 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 14 mm	14	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 16 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 16 mm	16	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.41 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 18 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 18 mm	18	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.46 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 20 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 20 mm	20	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.52 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 22 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 22 mm	22	$T=0.32 \pm 20\%$ $S=0.57 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 24 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 24 mm	24	$T=0.35 \pm 20\%$ $S=0.62 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 26 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 26 mm	26	$T=0.38 \pm 20\%$ $S=0.68 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 28 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 28 mm	28	$T=0.41 \pm 20\%$ $S=0.73 \pm 20\%$
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,4 мм, длина: 30 мм	Screw Locking VA HAQ06 2.4 mm, length: 30 mm	30	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$

Винт фиксирующий НАQ06 2,7 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм, 50-60 мм с шагом 5 мм / Screw Locking НАQ06 2.7 mm, length: 8-60 mm increments 2 mm, 50-60 mm increments 5 mm

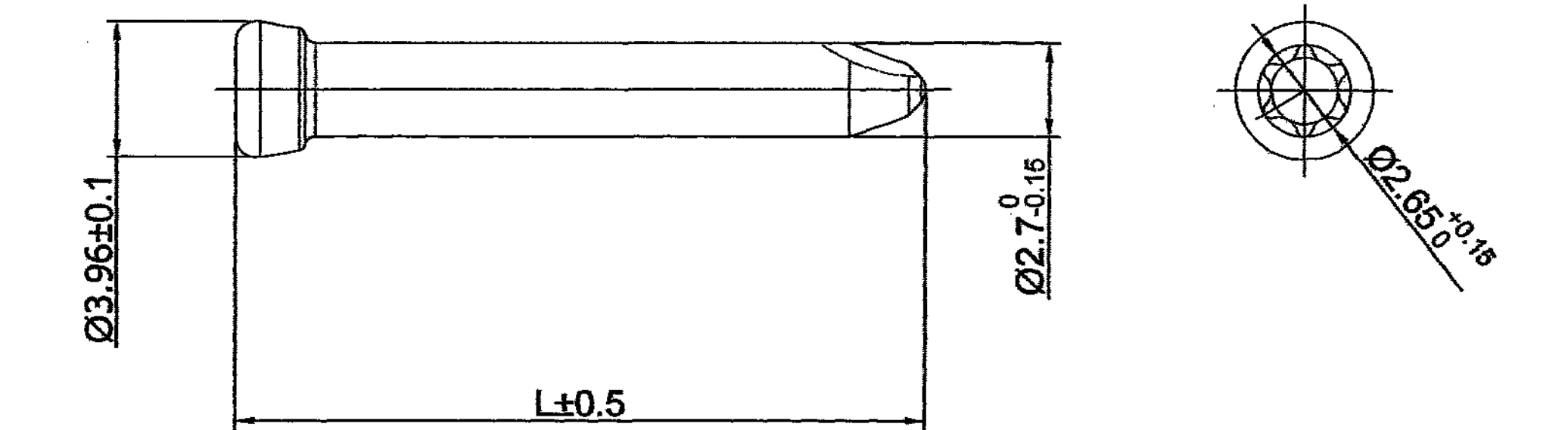


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, µm, not more
2,7 ⁰ _{-0,15}	3,96±0,1	2,65 ^{+0.15} ₀	0,4 0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± 1% Mass with tolerances, g ± 1%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 8 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 8 mm	8	T=0.15±20% S=0.26±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 10 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 10 mm	10	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 12 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 12 mm	12	T=0.22±20% S=0.39±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 14 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 14 mm	14	T=0.26±20% S=0.46±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 16 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 16 mm	16	T=0.29±20% S=0.52±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 18 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 18 mm	18	T=0.33±20% S=0.59±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 20 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 20 mm	20	T=0.37±20% S=0.66±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 22 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 22 mm	22	T=0.4±20% S=0.72±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 24 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 24 mm	24	T=0.44±20% S=0.79±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 26 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 26 mm	26	T=0.48±20% S=0.86±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 28 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 28 mm	28	T=0.52±20% S=0.93±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 30 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 30 mm	30	T=0.55±20% S=0.98±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 32 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 32 mm	32	T=0.59±20% S=1.06±20%

Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 34 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 34 mm	34	T=0.63±20% S=1.33±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 36 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 36 mm	36	T=0.66±20% S=1.18±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 38 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 38 mm	38	T=0.7±20% S=1.25±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 40 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 40 mm	40	T=0.74±20% S=1.33±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 42 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 42 mm	42	T=0.77±20% S=1.38±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 44 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 44 mm	44	T=0.81±20% S=1.45±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 46 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 46 mm	46	T=0.85±20% S=1.52±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 48 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 48 mm	48	T=0.88±20% S=1.58±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 50 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 50 mm	50	T=0.92±20% S=1.65±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 52 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 52 mm	52	T=0.96±20% S=1.72±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 54 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 54 mm	54	T=0.99±20% S=1.78±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 55 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 55 mm	55	T=1.01±20% S=1.81±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 56 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 56 mm	56	T=1.03±20% S=1.85±20%
Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 58 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 58 mm	58	T=1.07±20% S=1.92±20%

Винт фиксирующий HAQ06 2,7 мм, длина: 60 мм	Screw Locking HAQ06 2.7 mm, length: 60 mm	60	T=1.1±20% S=1.97±20%
---	---	----	-------------------------

Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 6-60 мм с шагом 2 мм / Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 6-60 mm increments 2 mm

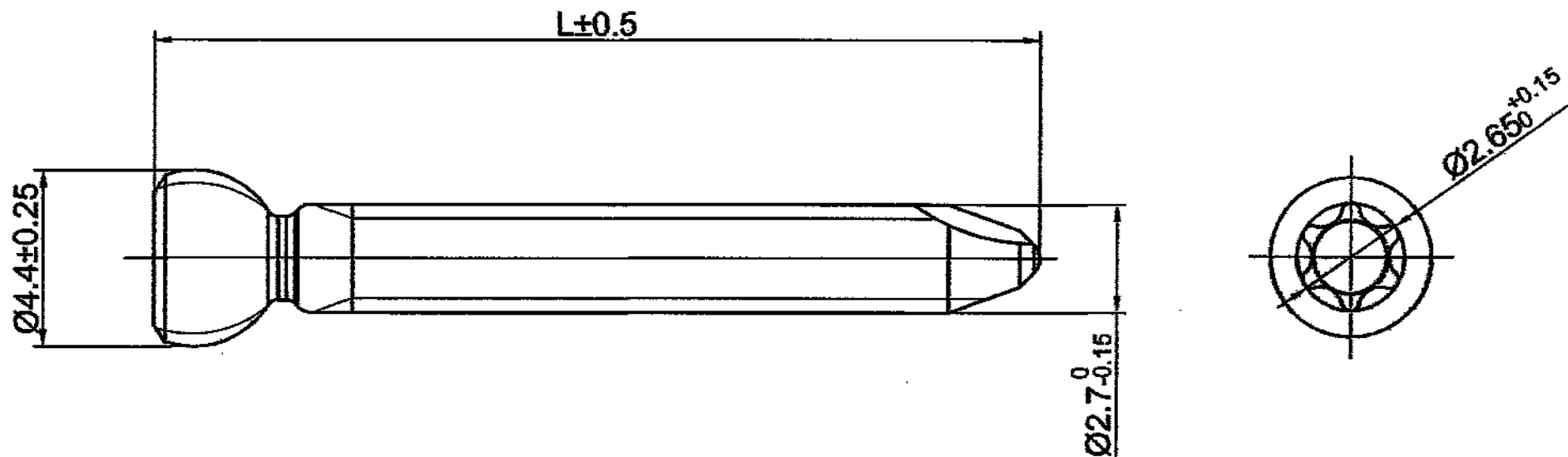


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, µm, not more
$2.7 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$	4.4 ± 0.25	$2.65 \begin{smallmatrix} +0.15 \\ 0 \end{smallmatrix}$	0,4 0,8 1,6

Описание	Description	L ±0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 6 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 6 mm	6	T=0.11±20% S=0.2±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 8 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 8 mm	8	T=0.15±20% S=0.26±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 10 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 10 mm	10	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 12 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 12 mm	12	T=0.22±20% S=0.39±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 14 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 14 mm	14	T=0.26±20% S=0.46±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 16 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 16 mm	16	T=0.29±20% S=0.52±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 18 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 18 mm	18	T=0.33±20% S=0.59±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 20 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 20 mm	20	T=0.37±20% S=0.66±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 22 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 22 mm	22	T=0.4±20% S=0.72±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 24 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 24 mm	24	T=0.44±20% S=0.79±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 26 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 26 mm	26	T=0.48±20% S=0.86±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 28 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 28 mm	28	T=0.52±20% S=0.93±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 30 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 30 mm	30	T=0.55±20% S=0.98±20%

Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 32 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 32 mm	32	T=0.59±20% S=1.06±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 34 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 34 mm	34	T=0.63±20% S=1.33±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 36 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 36 mm	36	T=0.66±20% S=1.18±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 38 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 38 mm	38	T=0.7±20% S=1.25±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 40 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 40 mm	40	T=0.74±20% S=1.33±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 42 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 42 mm	42	T=0.77±20% S=1.38±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 44 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 44 mm	44	T=0.81±20% S=1.45±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 46 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 46 mm	46	T=0.85±20% S=1.52±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 48 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 48 mm	48	T=0.88±20% S=1.58±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 50 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 50 mm	50	T=0.92±20% S=1.65±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 52 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 52 mm	52	T=0.96±20% S=1.72±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 54 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 54 mm	54	T=0.99±20% S=1.78±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 55 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 55 mm	55	T=1.03±20% S=1.85±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 56 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 56 mm	56	T=1.07±20% S=1.92±20%

Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 58 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 58 mm	58	T=1.1±20% S=1.97±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 2,7 мм, длина: 60 мм	Screw Locking with VA HAQ06 2.7 mm, length: 60 mm	60	T=1.15±20% S=2.25±20%

Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 10-90 мм с шагом 2 мм, 45-90 мм с шагом 5 мм / Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 10-90 mm increments 2 mm, 45-90 mm increments 5 mm

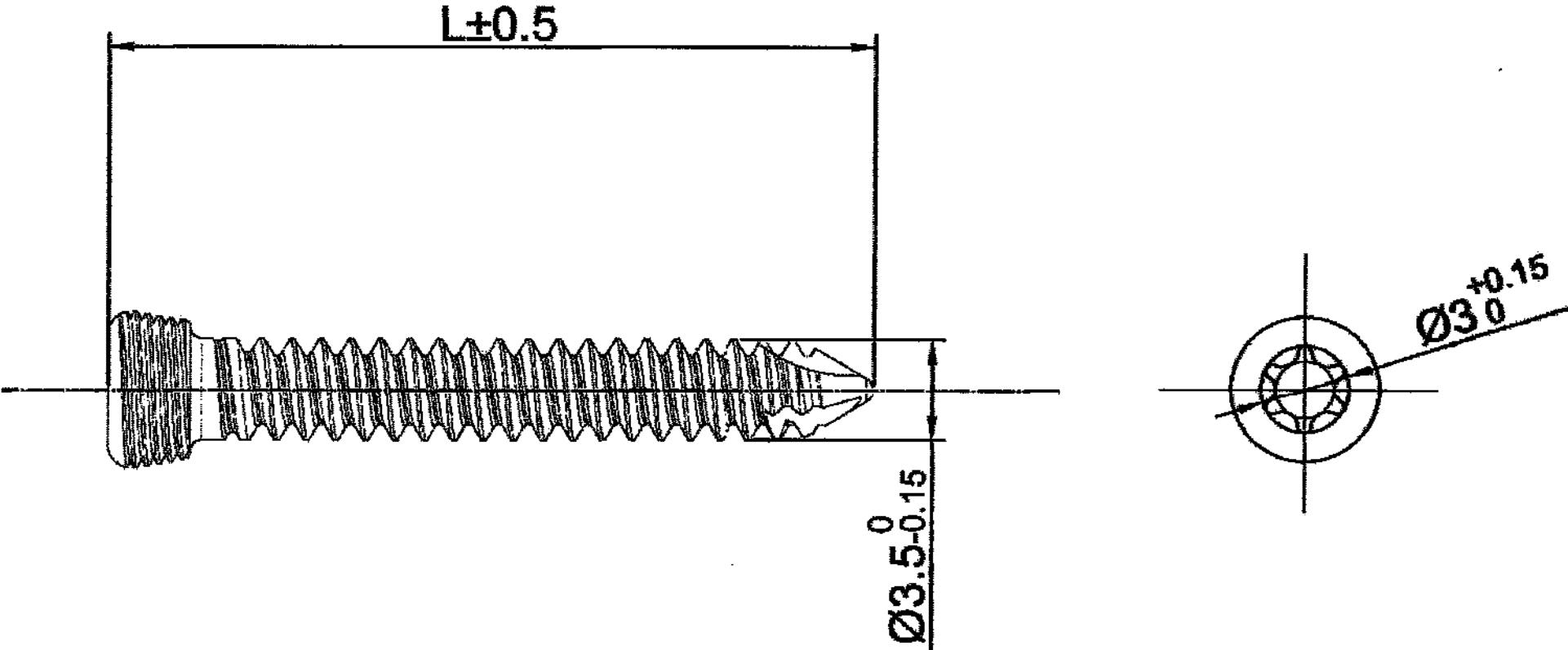

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
$3,5^{+0}_{-0,15}$	$3^{+0,15}_0$	0,8 1,6 3,2


Описание	Description	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 10 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 10 mm	10	T=0.35±20% S=0.62±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 12 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 12 mm	12	T=0.4±20% S=0.71±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 14 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 14 mm	14	T=0.45±20% S=0.8±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 16 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 16 mm	16	T=0.5±20% S=0.89±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 18 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 18 mm	18	T=0.56±20% S=1±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 20 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 20 mm	20	T=0.65±20% S=1.16±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 22 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 22 mm	22	T=0.69±20% S=1.24±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 24 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 24 mm	24	T=0.75±20% S=1.34±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 26 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 26 mm	26	T=0.81±20% S=1.45±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 28 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 28 mm	28	T=0.88±20% S=1.58±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 30 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 30 mm	30	T=0.94±20% S=1.69±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 32 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 32 mm	32	T=1±20% S=1.8±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 34 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 34 mm	34	T=1.06±20% S=1.9±20%

Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 36 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 36 mm	36	T=1.13±20% S=2.03±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 38 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 38 mm	38	T=1.19±20% S=2.14±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 40 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 40 mm	40	T=1.25±20% S=2.24±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 42 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 42 mm	42	T=1.32±20% S=2.37±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 44 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 44 mm	44	T=1.38±20% S=2.48±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 45 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 45 mm	45	T=1.41±20% S=2.53±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 46 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 46 mm	46	T=1.44±20% S=2.59±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 48 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 48 mm	48	T=1.5±20% S=2.69±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 50 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 50 mm	50	T=1.57±20% S=2.82±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 52 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 52 mm	52	T=1.63±20% S=2.93±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 54 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 54 mm	54	T=1.69±20% S=3.04±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 55 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 55 mm	55	T=1.72±20% S=3.09±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 56 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 56 mm	56	T=1.75±20% S=3.14±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 58 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 58 mm	58	T=1.82±20% S=3.27±20%

Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 60 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 60 mm	60	T=1.88±20% S=3.38±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 62 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 62 mm	62	T=1.94±20% S=3.49±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 64 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 64 mm	64	T=2.0±20% S=3.6±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 65 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 65 mm	65	T=2.05±20% S=3.66±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 66 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 66 mm	66	T=2.07±20% S=3.72±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 68 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 68 mm	68	T=2.13±20% S=3.83±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 70 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 70 mm	70	T=2.19±20% S=3.94±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 72 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 72 mm	72	T=2.25±20% S=4.04±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 74 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 74 mm	74	T=2.32±20% S=4.17±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 75 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 75 mm	75	T=2.36±20% S=4.21±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 76 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 76 mm	76	T=2.38±20% S=4.28±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 78 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 78 mm	78	T=2.44±20% S=4.38±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 80 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 80 mm	80	T=2.51±20% S=4.51±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 82 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 82 mm	82	T=2.57±20% S=4.62±20%

Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 84 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 84 mm	84	T=2.63±20% S=4.73±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 85 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 85 mm	85	T=2.66±20% S=4.78±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 86 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 86 mm	86	T=2.69±20% S=4.83±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 88 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 88 mm	88	T=2.76±20% S=4.96±20%
Винт фиксирующий HAQ06 3,5 мм, длина: 90 мм	Screw Locking HAQ06 3.5 mm, length: 90 mm	90	T=2.82±20% S=5.07±20%

Винт фиксирующий НАQ06 5,0 мм, длина: 14-40 мм с шагом 2 мм, 15-110 мм с шагом 2 мм / Screw Locking НАQ06 5.0 mm, length: 14-40 mm increments 2 mm, 15-110 mm increments 5 mm

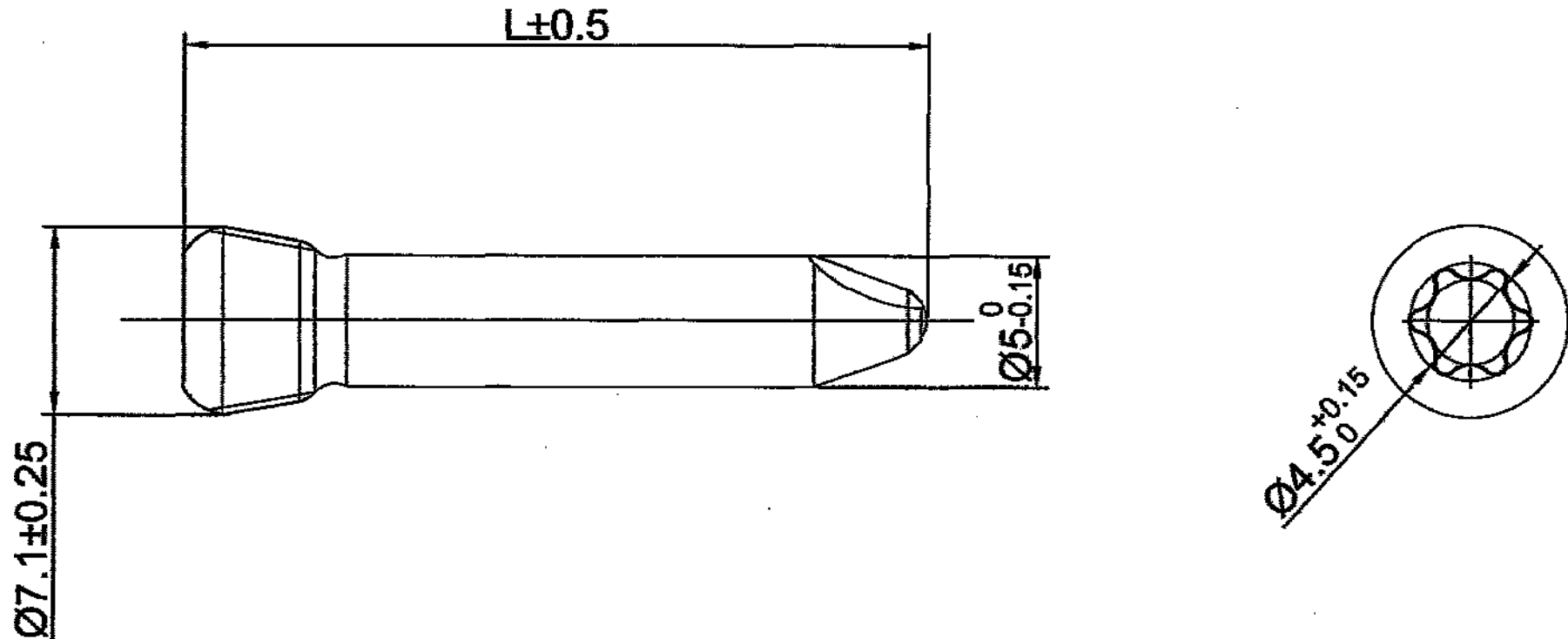


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
$5,0^{0}_{-0,15}$	$7,1 \pm 0,25$	$4,5^{+0}_{0} \pm 0,15$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ±0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 14 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 14 mm	14	T=0.94±20% S=1.7±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 15 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 15 mm	15	T=1.08±20% S=1.94±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 16 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 16 mm	16	T=1.21±20% S=2.18±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 18 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 18 mm	18	T=1.35±20% S=2.42±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 20 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 20 mm	20	T=1.48±20% S=2.66±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 22 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 22 mm	22	T=1.62±20% S=2.91±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 24 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 24 mm	24	T=1.75±20% S=3.15±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 25 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 25 mm	25	T=1.89±20% S=3.39±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 26 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 26 mm	26	T=2.02±20% S=3.63±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 28 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 28 mm	28	T=2.16±20% S=3.88±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 30 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 30 mm	30	T=2.29±20% S=4.12±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 32 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 32 mm	32	T=2.42±20% S=4.36±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 34 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 34 mm	34	T=2.56±20% S=4.6±20%

Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 35 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 35 mm	35	T=2.69±20% S=4.84±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 36 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 36 mm	36	T=3.03±20% S=5.45±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 38 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 38 mm	38	T=3.37±20% S=6.06±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 40 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 40 mm	40	T=3.7±20% S=6.66±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 45 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 45 mm	45	T=4.04±20% S=7.27±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 50 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 50 mm	50	T=4.38±20% S=7.87±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 55 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 55 mm	55	T=4.72±20% S=8.48±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 60 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 60 mm	60	T=5.05±20% S=9.08±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 65 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 65 mm	65	T=5.39±20% S=9.69±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 70 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 70 mm	70	T=5.73±20% S=10.3±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 75 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 75 mm	75	T=6.06±20% S=10.9±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 80 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 80 mm	80	T=6.4±20% S=11.51±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 85 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 85 mm	85	T=6.74±20% S=12.11±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 90 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 90 mm	90	T=7.07±20% S=12.72±20%

Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 95 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 95 mm	95	T=7.41±20% S=13.32±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 100 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 100 mm	100	T=0.94±20% S=1.7±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 105 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 105 mm	105	T=1.08±20% S=1.94±20%
Винт фиксирующий HAQ06 5,0 мм, длина: 110 мм	Screw Locking HAQ06 5.0 mm, length: 110 mm	110	T=1.21±20% S=2.18±20%

Винт фиксирующий НАQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 50-140 мм с шагом 5 мм / Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 50-140 mm increments 5 mm

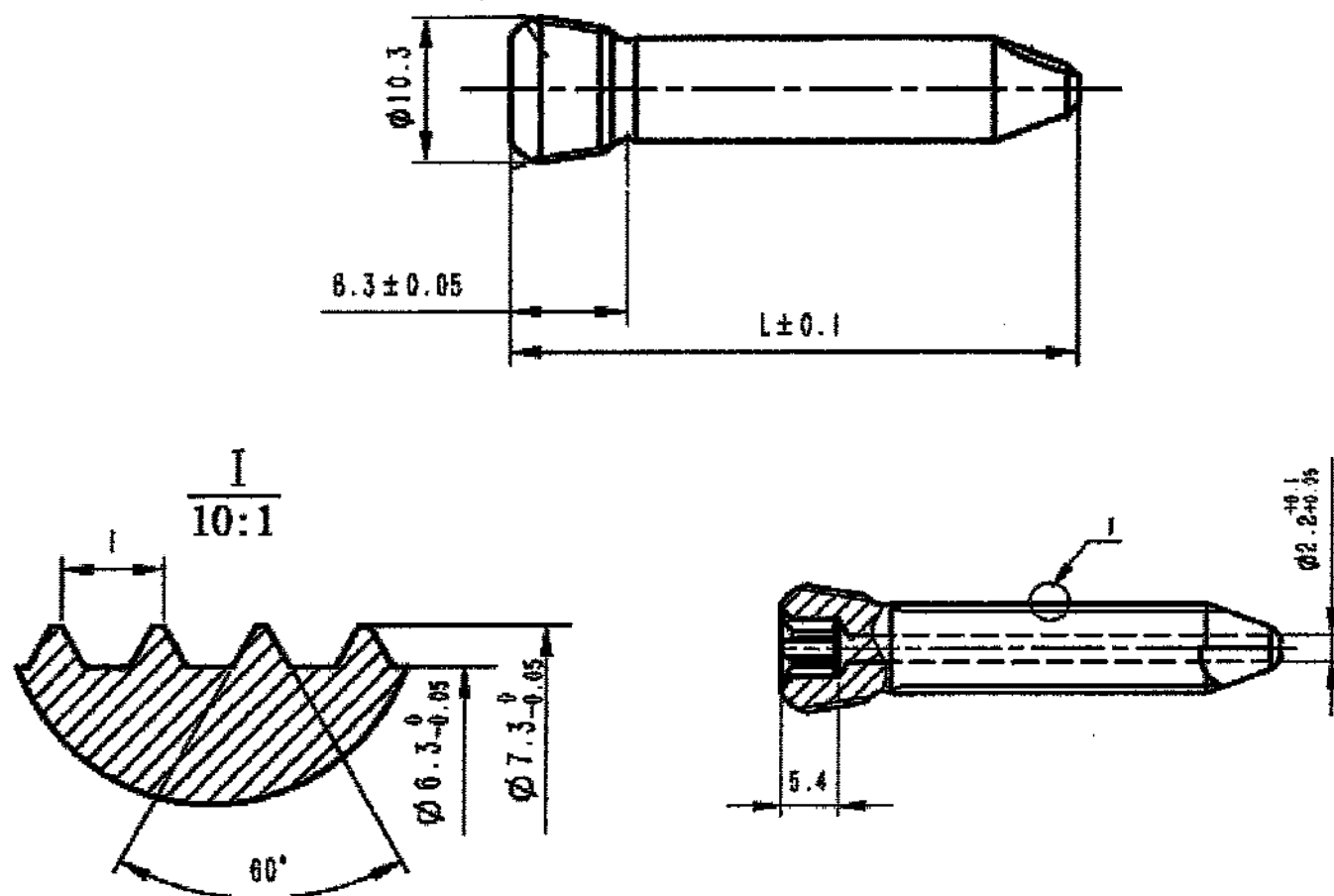


Диаметр отверстия с погрешностями, мм ± мм	Длина отверстия с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Резьба / Thread				Шероховатость, мкм, не более
				Макс. диаметр, мм	Мин. диаметр, мм	Угол наклона сторон профиля, °	Шаг, мм	
Diameter hole with tolerances, mm ± mm	Length hole with tolerances, mm ± mm	Width of screw head with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Max Diameter, mm	Min Diameter, mm	The angle of the profile sides, °	Pitch, mm	Roughness, µm, not more
2,2 ^{+0,1} _{+0,05}	5,4± 0,25	8,3± 0,05	10,3± 0,25	7,3 ⁰ _{-0,05}	6,3 ⁰ _{-0,05}	60	1	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± L, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 50 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 50 мм	50	T=6.97±20% S=12.53±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 55 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 55 мм	55	T=7.66±20% S=13.79±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 60 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 60 мм	60	T=8.36±20% S=15.04±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 65 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 65 мм	65	T=9.06±20% S=16.3±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 70 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 70 мм	70	T=9.75±20% S=17.55±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 75 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 75 мм	75	T=10.45±20% S=18.8±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 80 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 80 мм	80	T=11.15±20% S=20.6±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 85 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 85 мм	85	T=11.84±20% S=21.31±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 90 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 90 мм	90	T=12.54±20% S=22.56±20%

Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 95 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 95 мм	95	T=13.24±20% S=23.82±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 100 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 100 мм	100	T=13.93±20% S=25.1±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 105 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 105 мм	105	T=14.6±20% S=26.3±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 110 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 110 мм	110	T=15.3±20% S=27.6±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 115 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 115 мм	115	T=16.0±20% S=28.8±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 120 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 120 мм	120	T=16.72±20% S=30.1±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 125 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 125 мм	125	T=17.4±20% S=31.3±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 130 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 130 мм	130	T=18.1±20% S=32.6±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 135 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 135 мм	135	T=18.8±20% S=33.84±20%
Screw Locking HAQ06 Cannulated 7.3 mm, length: 140 mm	Винт фиксирующий HAQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 140 мм	140	T=19.5±20% S=35.1±20%

Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 50-140 мм с шагом 5 мм / Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length: 50-140 mm increments 5 mm

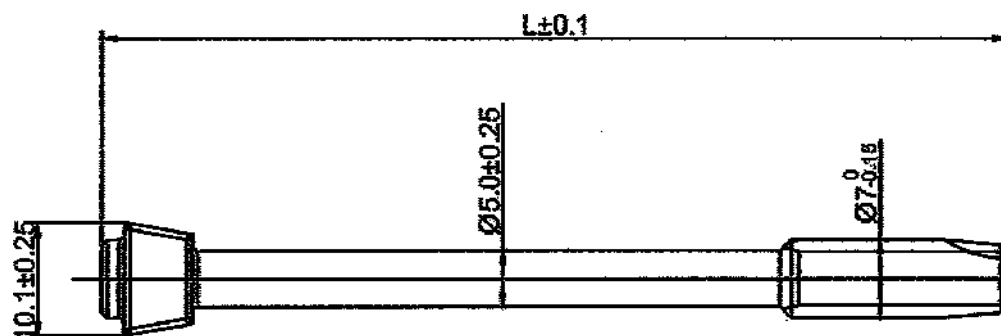


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Ширина головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Резьба / Thread Диаметр, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Width of screw head with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Diameter, mm	Roughness, μm, not more
$5 \pm 0,25$	$10,1 \pm 0,25$	$10,3 \pm 0,25$	$7,3_{-0,05}^0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±1, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 50 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 50 мм	50	T=4.87±20% S=8.77±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 55 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 55 мм	55	T=5.36±20% S=9.6±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 60 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 60 мм	60	T=5.8±20% S=10.5±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 65 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 65 мм	65	T=6.3±20% S=11.4±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 70 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 70 мм	70	T=6.8±20% S=12.3±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 75 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 75 мм	75	T=7.3±20% S=13.1±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 80 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 80 мм	80	T=7.8±20% S=14±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 85 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 85 мм	85	T=8.2±20% S=14.9±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 90 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 90 мм	90	T=8.7±20% S=15.7±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 95 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 95 мм	95	T=9.2±20% S=16.6±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 100 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 100 мм	100	T=9.7±20% S=17.5±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 105 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 105 мм	105	T=10.2±20% S=18.4±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 110 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 110 мм	110	T=10.7±20% S=19.2±20%

Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 115 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 115 мм	115	T=11.2±20% S=20±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 120 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 120 мм	120	T=11.5±20% S=21±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 125 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 125 мм	125	T=12.1±20% S=21.9±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 130 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 130 мм	130	T=12.6±20% S=22.7±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 135 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 135 мм	135	T=13.1±20% S=23.6±20%
Screw Locking HBQ06 Lag 7.3 mm, length : 140 mm	Винт фиксирующий HBQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 140 мм	140	T=13.6±20% S=24.5±20%

Винт фиксирующий НАQ02 1,5 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм / Screw Locking НАQ02 1.5 mm, length: 6-30 mm increments 2 mm

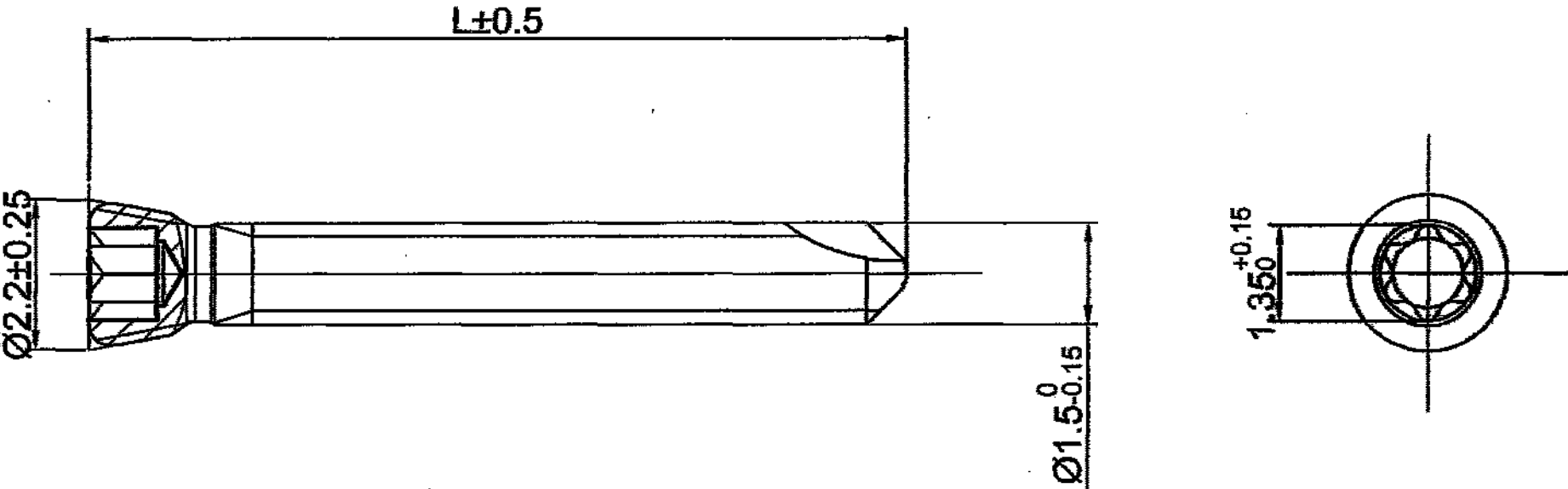

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
1,5 ⁰ _{-0,15}	2,2±0,25	1,35 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L = 0.5 mm (mm)	Mass with tolerances, g ± g Масса с погрешностями, г ± г
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 6 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 6 мм	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 8 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 8 мм	8	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 10 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 10 мм	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 12 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 12 мм	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 14 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 14 мм	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 16 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 16 мм	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 18 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 18 мм	18	T=0.12±20% S=0.22±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 20 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 20 мм	20	T=0.13±20% S=0.24±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 22 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 22 мм	22	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 24 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 24 мм	24	T=0.15±20% S=0.27±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 26 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 26 мм	26	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 28 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 28 мм	28	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Locking HAQ02 1.5 mm, length: 30 mm	Винт фиксирующий HAQ02 1,5 мм, длина: 30 мм	30	T=0.2±20% S=0.36±20%

Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 20-40 мм с шагом 2 мм, 45-60 мм с шагом 5 мм /
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 20-40 mm increments 2 mm, 45-60 mm increments 5 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, µm, not more
3,5 ⁰ _{-0,15}	3 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5 мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 20	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 20	20	T=0.75±20% S=1.35±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 22	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 22	22	T=0.8±20% S=1.45±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 24	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 24	24	T=0.9±20% S=1.6±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 26	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 26	26	T=0.95±20% S=1.7±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 28	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 28	28	T=1±20% S=1.8±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 30	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 30	30	T=1.05±20% S=1.9±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 32	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 32	32	T=1.1±20% S=2.0±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 34	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 34	34	T=1.15±20% S=2.05±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 36	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 36	36	T=1.2±20% S=2.15±20%

Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 38	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 38	38	T=1.3±20% S=2.35±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 40	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 40	40	T=1.35±20% S=2.4±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 45	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 45	45	T=1.5±20% S=2.7±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 50	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 50	50	T=1.65±20% S=3.0±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 55	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 55	55	T=1.8±20% S=3.25±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 3.5 mm, with T15 Stardrive recess, length: 60	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15, длина: 60	60	T=1.95±20% S=3.5±20%


Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 22-50 мм с шагом 2 мм, 60,70,75. / Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 22-50 mm increments 2 mm, 60,70,75.

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
3,5 ⁰ _{-0,15}	3 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5 мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 22	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 22	22	T=1.75±20% S=3.15±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 24	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 24	24	T=1.9±20% S=3.4±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 26	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 26	26	T=2.05±20% S=3.7±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 28	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 28	28	T=2.2±20% S=4±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 30	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 30	30	T=2.35±20% S=4.25±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 32	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 32	32	T=2.5±20% S=4.5±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 34	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 34	34	T=2.6±20% S=4.7±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 36	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 36	36	T=2.75±20% S=4.95±20%
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 38	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 38	38	T=2.9±20% S=5.25±20%

Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 40	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 40	40	$T=3\pm20\%$ $S=5.4\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 42	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 42	42	$T=3.15\pm20\%$ $S=5.7\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 44	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 44	44	$T=3.3\pm20\%$ $S=5.95\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 46	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 46	46	$T=3.45\pm20\%$ $S=6.2\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 48	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 48	48	$T=3.6\pm20\%$ $S=6.5\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 50	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 50	50	$T=3.75\pm20\%$ $S=6.75\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 60	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 60	60	$T=4.45\pm20\%$ $S=8\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 70	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 70	70	$T=5.15\pm20\%$ $S=9.3\pm20\%$
Screw Locking HAQ03 self-tapping, 5.0 mm, with T25 Star drive, length: 75	Винт фиксирующий HAQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 75	75	$T=5.5\pm20\%$ $S=9.9\pm20\%$


Винт фиксирующий НАQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 5, 7 мм, 6-18 мм с шагом 2 мм / Screw Locking НАQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 5, 7 mm, 6-18 mm increments 2 mm

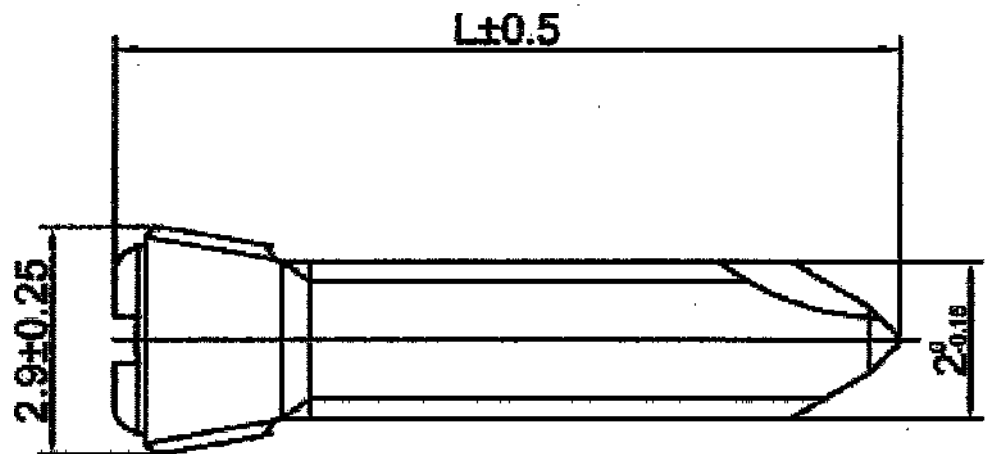

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$2_{-0.15}^0$	2.9 ± 0.25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 0,5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 5 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 5 мм	5	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 6 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 6 мм	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 7 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 7 мм	7	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 8 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 8 мм	8	T=0.07±20% S=0.12±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 10 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 10 мм	10	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 12 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 12 мм	12	T=0.11±20% S=0.19±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 14 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 14 мм	14	T=0.12±20% S=0.21±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 16 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 16 мм	16	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.0 mm, length: 18 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 18 мм	18	T=0.16±20% S=0.28±20%


Винт фиксирующий НАQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 5, 7 мм, 6-18 мм с шагом 2 мм / Screw Locking НАQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 5, 7 mm, 6-18 mm increments 2 mm

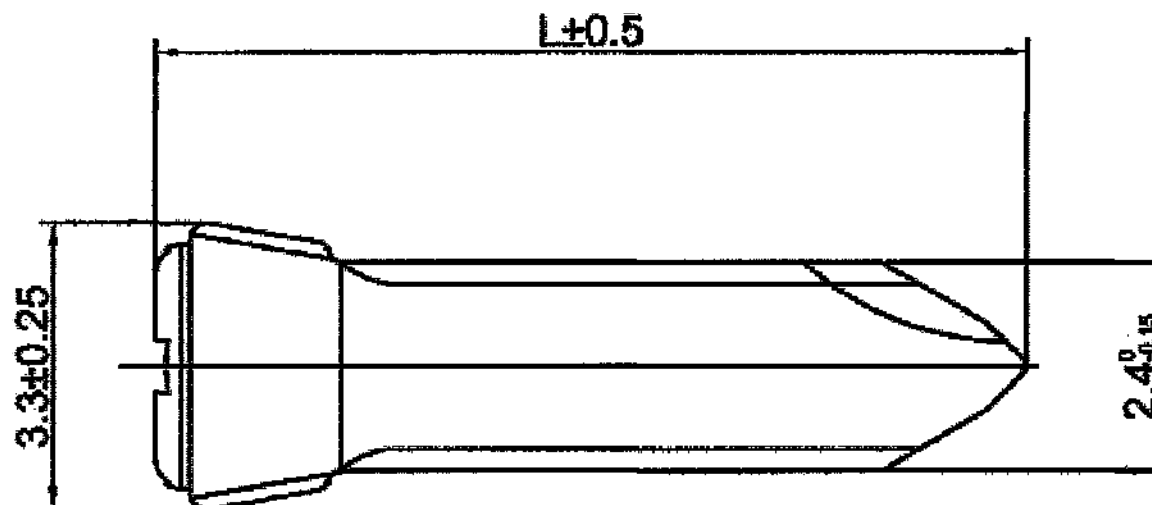

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm not more
$2.4^{+0}_{-0.15}$	3.3 ± 0.25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 5 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 5 мм	5	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 6 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 6 мм	6	T=0.08±20% S=0.14±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 7 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 7 мм	7	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 8 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 8 мм	8	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 10 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 10 мм	10	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 12 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 12 мм	12	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 14 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 14 мм	14	T=0.2±20% S=0.36±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 16 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 16 мм	16	T=0.23±20% S=0.42±20%
Screw Locking HAQ 02 cruciform, self - tapping, 2.4 mm, length: 18 mm	Винт фиксирующий HAQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 18 мм	18	T=0.26±20% S=0.47±20%

Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 10-60 мм с шагом 2 мм, 65-80 с шагом 5 мм / Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 10-60 mm increments 2 mm, 65-80 mm increments 5 mm

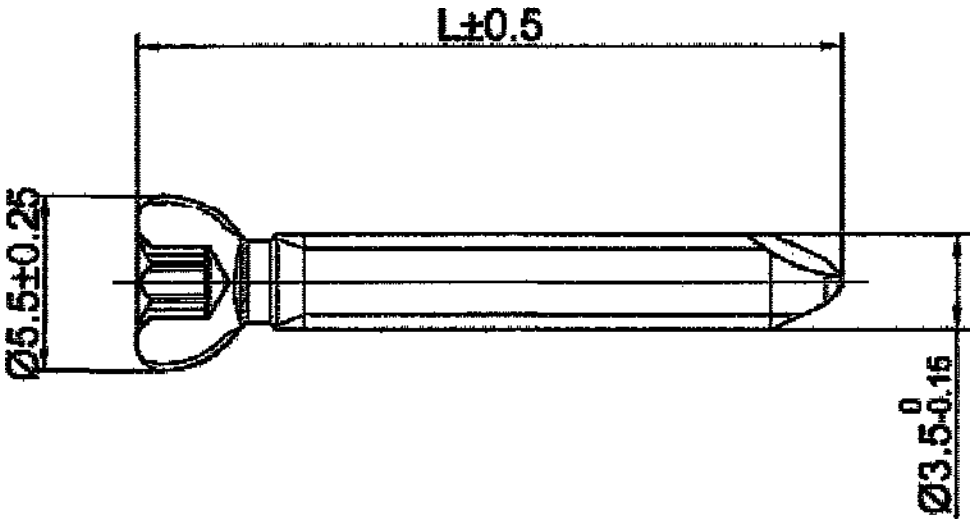


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
$3,5^{0}_{-0,15}$	$5,5 \pm 0,25$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.5 mm (mm)	Mass с погрешностями, g ± g / Mass with tolerances, g ± g
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 10 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 10 мм	10	T=0.28±20% S=0.51±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 12 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 12 мм	12	T=0.34±20% S=0.61±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 14 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 14 мм	14	T=0.4±20% S=0.71±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 16 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 16 мм	16	T=0.45±20% S=0.81±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 18 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 18 мм	18	T=0.51±20% S=0.91±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 20 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 20 мм	20	T=0.57±20% S=1.02±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 22 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 22 мм	22	T=0.62±20% S=1.12±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 24 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 24 мм	24	T=0.68±20% S=1.22±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 26 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 26 мм	26	T=0.73±20% S=1.32±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 28 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 28 мм	28	T=0.79±20% S=1.42±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 30 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 30 мм	30	T=0.85±20% S=1.52±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 32 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 32 мм	32	T=0.9±20% S=1.63±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 34 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 34 мм	34	T=0.96±20% S=1.73±20%

Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 36 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 36 мм	36	T=1.02±20% S=1.83±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 38 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 38 мм	38	T=1.07±20% S=1.93±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 40 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 40 мм	40	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 42 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 42 мм	42	T=1.19±20% S=2.13±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 44 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 44 мм	44	T=1.24±20% S=2.24±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 46 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 46 мм	46	T=1.3±20% S=2.34±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 48 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 48 мм	48	T=1.36±20% S=2.44±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 50 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 50 мм	50	T=1.41±20% S=2.54±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 52 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 52 мм	52	T=1.47±20% S=2.64±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 54 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 54 мм	54	T=1.53±20% S=2.74±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 56 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 56 мм	56	T=1.58±20% S=2.85±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 58 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 58 мм	58	T=1.64±20% S=2.95±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 60 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 60 мм	60	T=1.7±20% S=3.05±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 65 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 65 мм	65	T=1.84±20% S=3.3±20%

Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 70 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 70 мм	70	T=1.98±20% S=3.56±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 75 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 75 мм	75	T=2.12±20% S=3.81±20%
Screw Locking with VA HAQ06 3.5 mm, length: 80 mm	Винт фиксирующий с переменным углом HAQ06 3,5 мм, длина: 80 мм	80	T=2.26±20% S=4.07±20%

Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 22-60 мм с шагом 2 мм, 65-90 с шагом 5 мм / Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 22-60 mm increments 2 mm, 65-90 mm increments 5 mm

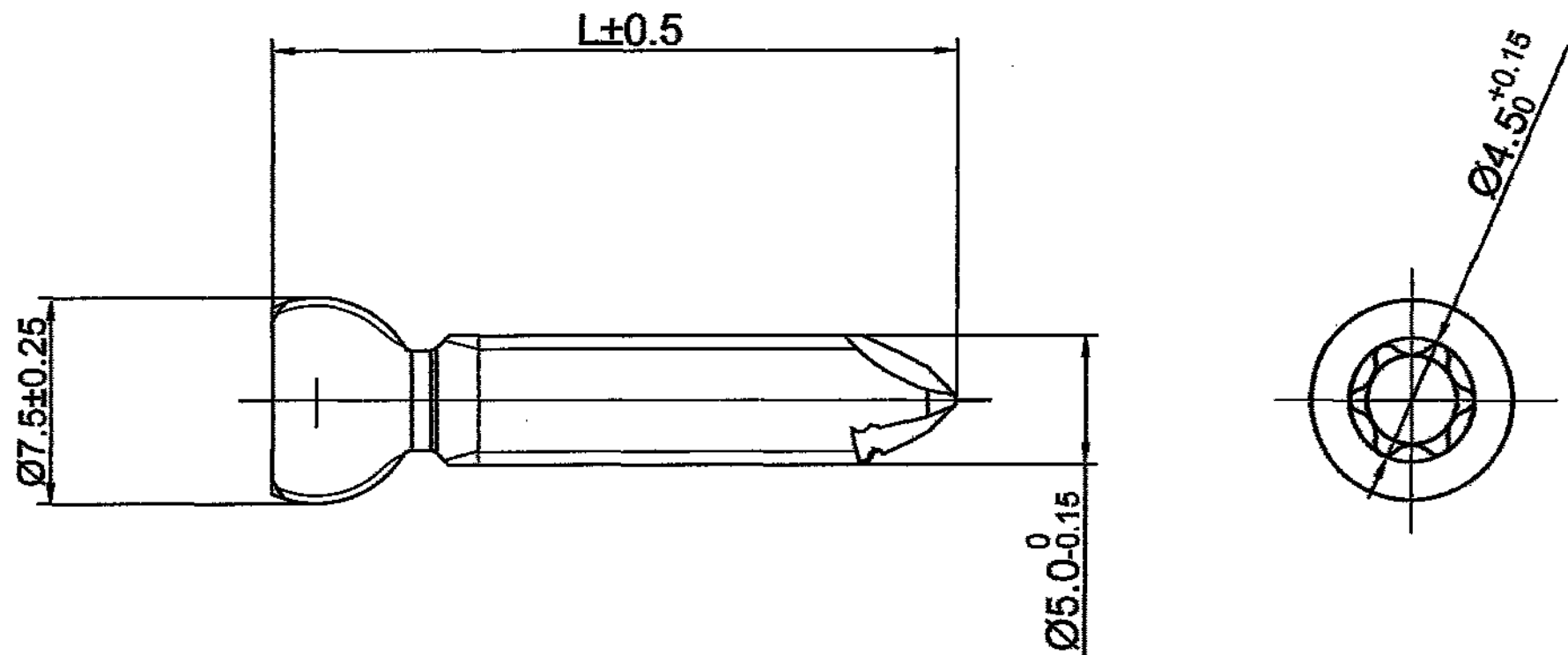


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм. не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
5,0 ⁰ _{-0,15}	7,5±0,25	4,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ± 0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 22 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 22 mm	22	T=1.75±20% S=3.15±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 24 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 24 mm	24	T=1.9±20% S=3.4±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 26 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 26 mm	26	T=2.05±20% S=3.7±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 28 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 28 mm	28	T=2.2±20% S=4±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 30 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 30 mm	30	T=2.35±20% S=4.25±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 32 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 32 mm	32	T=2.5±20% S=4.5±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 34 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 34 mm	34	T=2.6±20% S=4.7±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 36 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 36 mm	36	T=2.75±20% S=4.95±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 38 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 38 mm	38	T=2.9±20% S=5.25±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 40 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 40 mm	40	T=3±20% S=5.4±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 42 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 42 mm	42	T=3.15±20% S=5.7±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 44 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 44 mm	44	T=3.3±20% S=5.95±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 46 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 46 mm	46	T=3.45±20% S=6.2±20%

Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 48 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 48 mm	48	T=3.6±20% S=6.5±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 50 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 50 mm	50	T=3.75±20% S=6.75±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 52 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 52 mm	52	T=3.9±20% S=7±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 54 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 54 mm	54	T=4.05±20% S=7.3±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 56 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 56 mm	56	T=4.2±20% S=7.55±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 58 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 58 mm	58	T=4.35±20% S=7.82±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 60 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 60 mm	60	T=4.45±20% S=8±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 65 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 65 mm	65	T=4.8±20% S=8.63±2g
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 70 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 70 mm	70	T=5.15±20% S=9.3±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 75 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 75 mm	75	T=5.5±20% S=9.9±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 80 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 80 mm	80	T=5.85±20% S=10.52±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 85 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 85 mm	85	T=6.2±20% S=11.15±20%
Винт фиксирующий с переменным углом HAQ03 5,0 мм, длина: 90 мм	Screw Locking with VA HAQ03 5.0 mm, length: 90 mm	90	T=6.55±20% S=11.8±20%

Винт кортикальный / Screw Cortex


Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 6-30 mm increments 2 mm

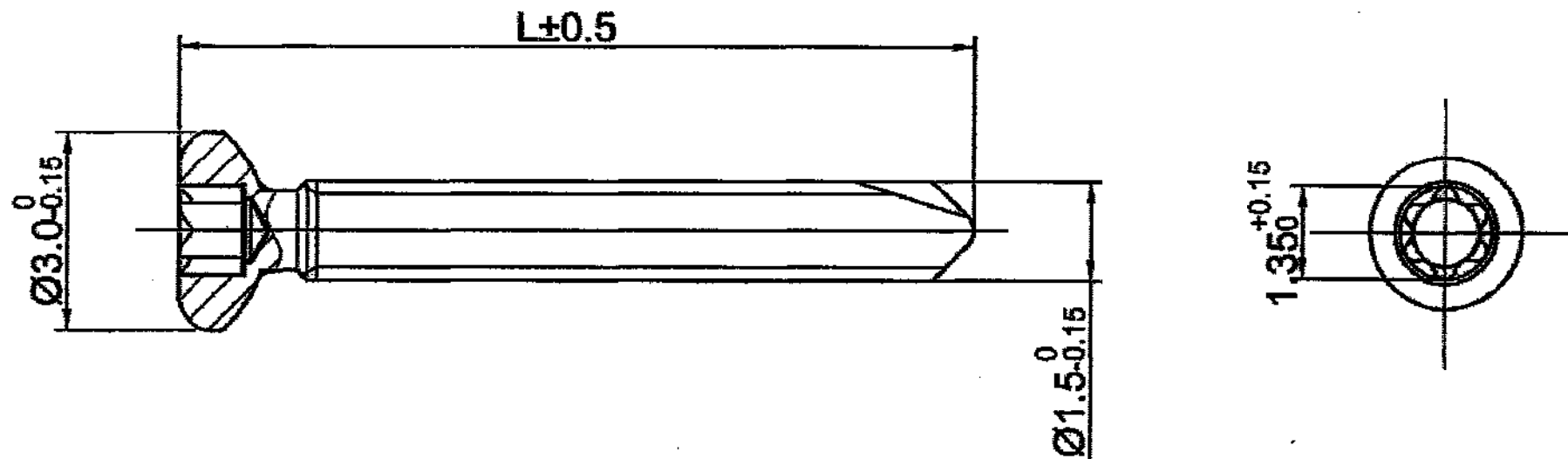

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, µm, not more
1,5 ⁰ _{-0,15}	3 ⁰ _{-0,15}	1,35 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 6 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 6 mm	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 8 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 8 mm	8	T=0.06±20% S=0.11±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 10 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 10 mm	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 12 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 12 mm	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 14 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 14 mm	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 16 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 16 mm	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 18 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 18 mm	18	T=0.12±20% S=0.22±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 20 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 20 mm	20	T=0.13±20% S=0.24±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 22 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 22 mm	22	T=0.14±20% S=0.25±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 24 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 24 mm	24	T=0.15±20% S=0.27±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 26 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 26 mm	26	T=0.17±20% S=0.31±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 28 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 28 mm	28	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 30 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 30 mm	30	T=0.2±20% S=0.36±20%

Винт кортикальный НАQ 04 2,0 мм, длина: 6-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex НАQ 04 2.0 mm, length: 6-40 mm increments 2 mm

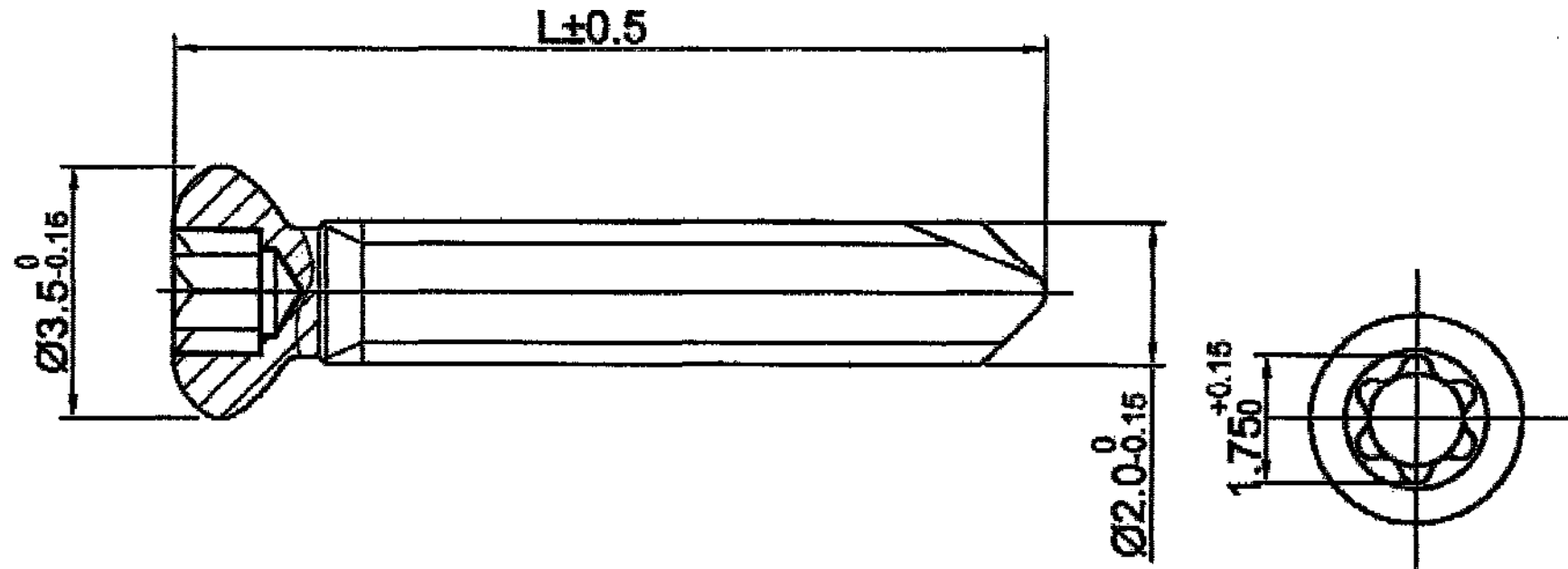


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
2,0 ⁰ _{-0,15}	3,5 ⁰ _{-0,15}	1,75 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L=0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 6 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 6 mm	6	T=0.06±20% S=0.11±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 8 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 8 mm	8	T=0.08±20% S=0.14±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 10 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 10 mm	10	T=0.1±20% S=0.18±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 12 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 12 mm	12	T=0.12±20% S=0.22±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 14 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 14 mm	14	T=0.14±20% S=0.25±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 16 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 16 mm	16	T=0.16±20% S=0.29±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 18 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 18 mm	18	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 20 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 20 mm	20	T=0.2±20% S=0.36±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 22 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 22 mm	22	T=0.22±20% S=0.40±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 24 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 24 mm	24	T=0.24±20% S=0.43±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 26 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 26 mm	26	T=0.26±20% S=0.47±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 28 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 28 mm	28	T=0.28±20% S=0.51±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 30 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 30 mm	30	T=0.3±20% S=0.54±20%

Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 32 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 32 mm	32	T=0.32±20% S=0.58±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 34 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 34 mm	34	T=0.34±20% S=0.62±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 36 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 36 mm	36	T=0.36±20% S=0.65±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 38 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 38 mm	38	T=0.38±20% S=0.68±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 40 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 40 mm	40	T=0.4±20% S=0.72±20%

Винт кортикальный НАQ 03 2,4 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex НАQ 03 2.4 mm, length: 8-60 mm increments 2 mm

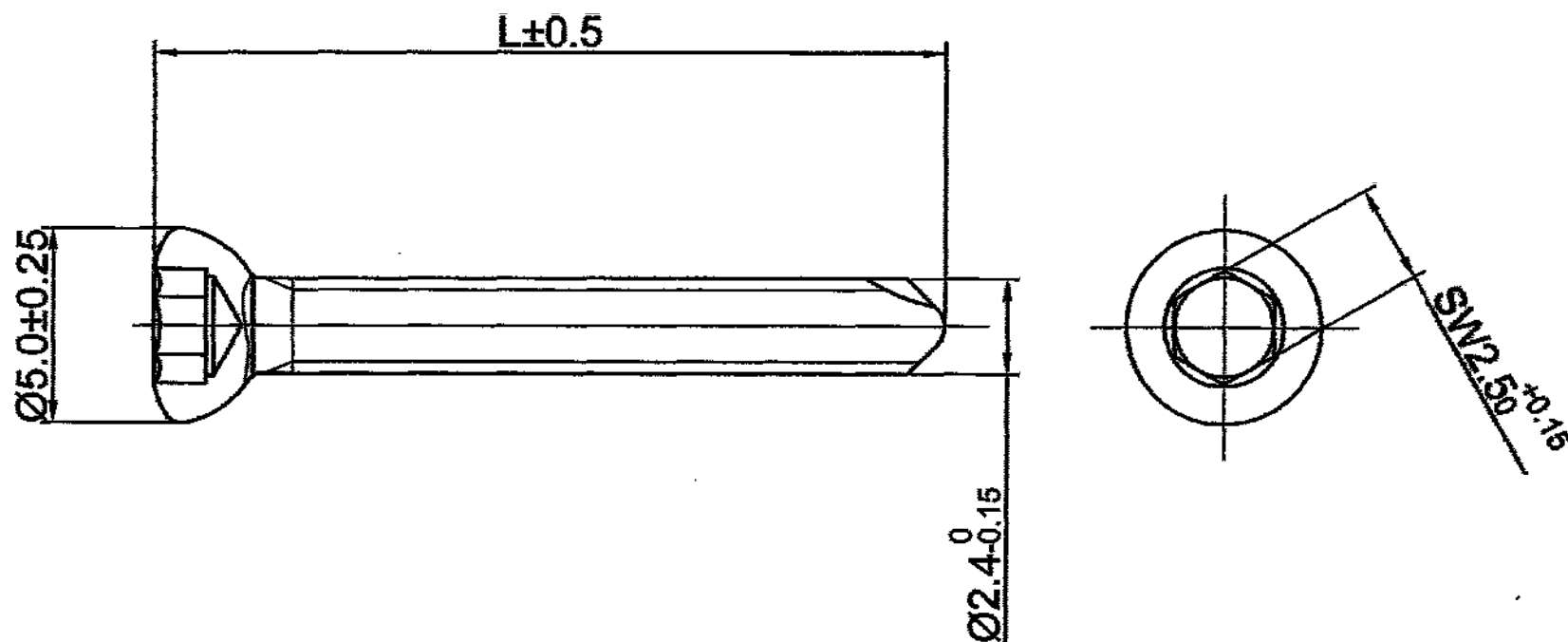


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Размер шестигранника, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hex's size, mm	Roughness, μm, not more
2,4 ⁰ _{-0,15}	5,0±0,25	2,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Винт кортикальный НАQ 03 2,4 мм, длина: 8 мм	Screw Cortex НАQ 03 2.4 mm, length: 8 mm	8	T=0.11±20% S=0.20±20%
Винт кортикальный НАQ 03 2,4 мм, длина: 10 мм	Screw Cortex НАQ 03 2.4 mm, length: 10 mm	10	T=0.14±20% S=0.25±20%

Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 12 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 12 mm	12	T=0.17±20% S=0.31±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 14 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 14 mm	14	T=0.2±20% S=0.36±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 16 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 16 mm	16	T=0.23±20% S=0.42±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 18 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 18 mm	18	T=0.26±20% S=0.47±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 20 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 20 mm	20	T=0.29±20% S=0.53±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 22 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 22 mm	22	T=0.32±20% S=0.58±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 24 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 24 mm	24	T=0.35±20% S=0.63±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 26 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 26 mm	26	T=0.38±20% S=0.69±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 28 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 28 mm	28	T=0.41±20% S=0.74±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 30 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 30 mm	30	T=0.44±20% S=0.79±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 32 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 32 mm	32	T=0.47±20% S=0.85±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 34 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 34 mm	34	T=0.5±20% S=0.9±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 36 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 36 mm	36	T=0.53±20% S=0.96±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 38 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 38 mm	38	T=0.56±20% S=1.0±20%

Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 40 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 40 mm	40	T=0.59±20% S=1.06±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 42 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 42 mm	42	T=0.61±20% S=1.1±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 44 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 44 mm	44	T=0.64±20% S=1.16±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 46 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 46 mm	46	T=0.67±20% S=1.21±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 48 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 48 mm	48	T=0.7±20% S=1.26±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 50 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 50 mm	50	T=0.73±20% S=1.31±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 52 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 52 mm	52	T=0.76±20% S=1.37±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 54 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 54 mm	54	T=0.79±20% S=1.42±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 56 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 56 mm	56	T=0.82±20% S=1.47±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 58 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 58 mm	58	T=0.85±20% S=1.52±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,4 мм, длина: 60 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.4 mm, length: 60 mm	60	T=0.88±20% S=1.58±20%

Винт кортикальный НАQ 03 2,7 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм, 50-60 мм с шагом 5 мм / Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 8-60 mm increments 2 mm, 50-60 mm increments 5 mm

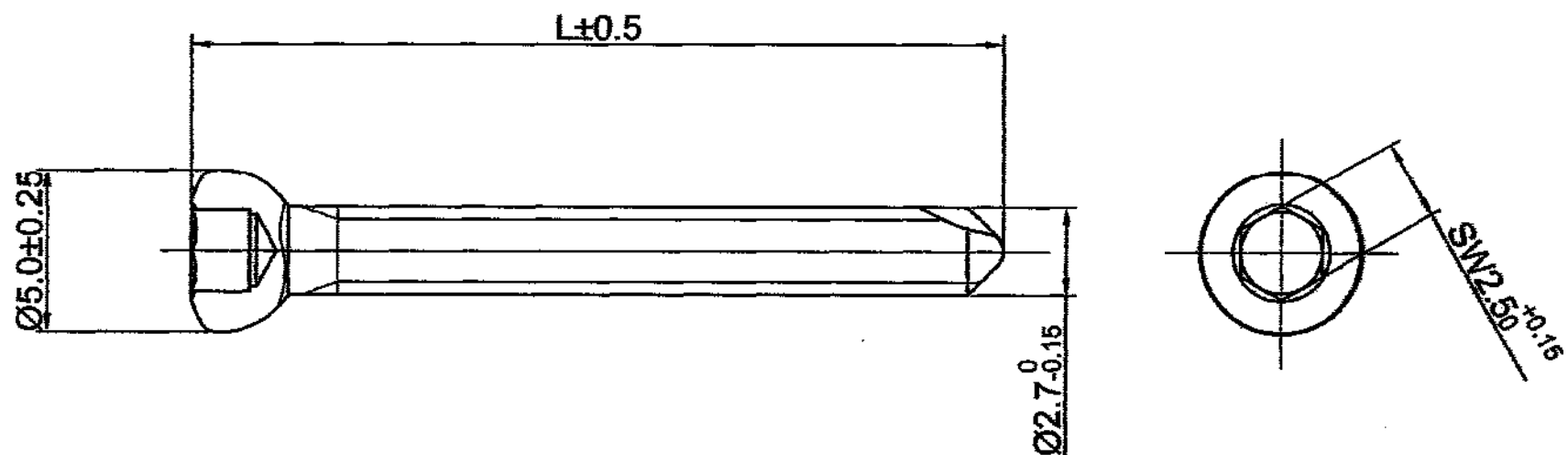


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Размер шестигранника, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hex's size, mm	Roughness, μm, not more
$2,7^{0}_{-0,15}$	$5,0 \pm 0,25$	$2,5^{+0,15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	$L \pm 0.5$ мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Винт кортикальный НАQ 03 2,7 мм, длина: 8 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 8 mm	8	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.26 \pm 20\%$
Винт кортикальный НАQ 03 2,7 мм, длина: 10 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 10 mm	10	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.33 \pm 20\%$
Винт кортикальный НАQ 03 2,7 мм, длина: 12 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 12 mm	12	$T=0.22 \pm 20\%$ $S=0.4 \pm 20\%$

Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 14 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 14 mm	14	T=0.26±20% S=0.46±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 16 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 16 mm	16	T=0.29±20% S=0.53±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 18 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 18 mm	18	T=0.33±20% S=0.6±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 20 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 20 mm	20	T=0.37±20% S=0.66±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 22 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 22 mm	22	T=0.4±20% S=0.73±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 24 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 24 mm	24	T=0.44±20% S=0.79±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 26 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 26 mm	26	T=0.48±20% S=0.86±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 28 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 28 mm	28	T=0.52±20% S=0.93±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 30 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 30 mm	30	T=0.55±20% S=0.99±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 32 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 32 mm	32	T=0.59±20% S=1.06±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 34 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 34 mm	34	T=0.63±20% S=1.13±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 36 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 36 mm	36	T=0.66±20% S=1.19±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 38 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 38 mm	38	T=0.7±20% S=1.26±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 40 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 40 mm	40	T=0.74±20% S=1.32±20%

Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 42 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 42 mm	42	T=0.77±20% S=1.39±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 44 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 44 mm	44	T=0.81±20% S=1.46±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 46 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 46 mm	46	T=0.85±20% S=1.52±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 48 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 48 mm	48	T=0.88±20% S=1.59±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 50 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 50 mm	50	T=0.92±20% S=1.65±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 52 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 52 mm	52	T=0.96±20% S=1.72±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 54 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 54 mm	54	T=1.01±20% S=1.82±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 55 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 55 mm	55	T=0.99±20% S=1.79±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 56 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 56 mm	56	T=1.03±20% S=1.85±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 58 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 58 mm	58	T=1.07±20% S=1.92±20%
Винт кортикальный HAQ 03 2,7 мм, длина: 60 мм	Screw Cortex HAQ 03 2.7 mm, length: 60 mm	60	T=1.1±20% S=2±20%

Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 10-90 мм с шагом 2 мм, 60-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 10 -90 mm increments 2 mm, 60-120 mm increments 5 mm

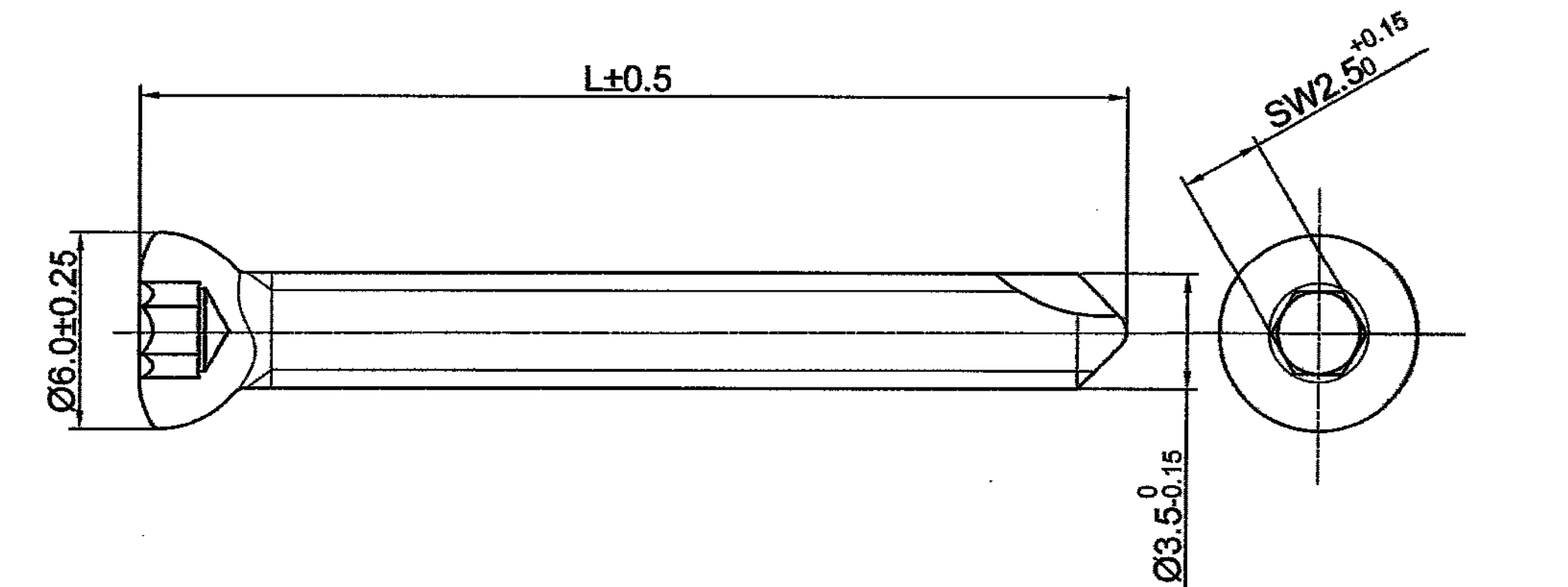

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Размер шестигранника, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hex size, mm	Roughness, µm, not more
3,5 ⁰ _{-0,15}	6,0±0,25	2,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2


Description	Описание	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 10 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 10 мм	10	T=0.28±20% S=0.51±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 12 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 12 мм	12	T=0.34±20% S=0.61±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 14 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 14 мм	14	T=0.4±20% S=0.71±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 16 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 16 мм	16	T=0.45±20% S=0.81±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 18 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 18 мм	18	T=0.51±20% S=0.91±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 20 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 20 мм	20	T=0.57±20% S=1.02±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 22 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 22 мм	22	T=0.62±20% S=1.12±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 24 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 24 мм	24	T=0.68±20% S=1.22±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 26 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 26 мм	26	T=0.73±20% S=1.32±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 28 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 28 мм	28	T=0.79±20% S=1.42±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 30 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 30 мм	30	T=0.85±20% S=1.52±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 32 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 32 мм	32	T=0.9±20% S=1.63±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 34 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 34 мм	34	T=0.96±20% S=1.73±20%

Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 36 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 36 мм	36	T=1.02±20% S=1.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 38 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 38 мм	38	T=1.07±20% S=1.93±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 40 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 40 мм	40	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 42 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 42 мм	42	T=1.19±20% S=2.13±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 44 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 44 мм	44	T=1.24±20% S=2.24±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 46 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 46 мм	46	T=1.3±20% S=2.34±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 48 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 48 мм	48	T=1.36±20% S=2.44±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 50 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 50 мм	50	T=1.41±20% S=2.54±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 52 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 52 мм	52	T=1.47±20% S=2.64±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 54 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 54 мм	54	T=1.53±20% S=2.74±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 56 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 56 мм	56	T=1.58±20% S=2.85±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 58 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 58 мм	58	T=1.64±20% S=2.95±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 60 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 60 мм	60	T=1.7±20% S=3.05±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 62 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 62 мм	62	T=1.75±20% S=3.15±20%

Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 64 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 64 мм	64	T=1.81±20% S=3.25±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 65 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 65 мм	65	T=1.84±20% S=3.3±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 66 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 66 мм	66	T=1.87±20% S=3.35±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 68 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 68 мм	68	T=1.92±20% S=3.46±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 70 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 70 мм	70	T=1.98±20% S=3.56±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 72 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 72 мм	72	T=2.03±20% S=3.66±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 74 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 74 мм	74	T=2.09±20% S=3.76±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 75 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 75 мм	75	T=2.12±20% S=3.81±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 76 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 76 мм	76	T=2.15±20% S=3.86±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 78 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 78 мм	78	T=2.2±20% S=3.96±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 80 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 80 мм	80	T=2.26±20% S=4.07±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 82 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 82 мм	82	T=2.32±20% S=4.17±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 84 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 84 мм	84	T=2.37±20% S=4.27±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 85 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 85 мм	85	T=2.4±20% S=4.32±20%

Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 86 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 86 мм	86	T=2.43±20% S=4.37±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 88 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 88 мм	88	T=2.49±20% S=4.47±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 90 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 90 мм	90	T=2.54±20% S=4.57±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 95 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 95 мм	95	T=2.68±20% S=4.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 100 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 100 мм	100	T=2.83±20% S=5.08±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 105 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 105 мм	105	T=2.97±20% S=5.34±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 110 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 110 мм	110	T=3.11±20% S=5.59±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 115 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 115 мм	115	T=3.25±20% S=5.84±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, length: 120 mm	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, длина: 120 мм	120	T=3.39±20% S=6.1±20%

Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 14-80 мм с шагом 2 мм, 85-100 мм с шагом 5 мм / Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 14-80 mm increments 2 mm, 85-100 mm increments 5 mm

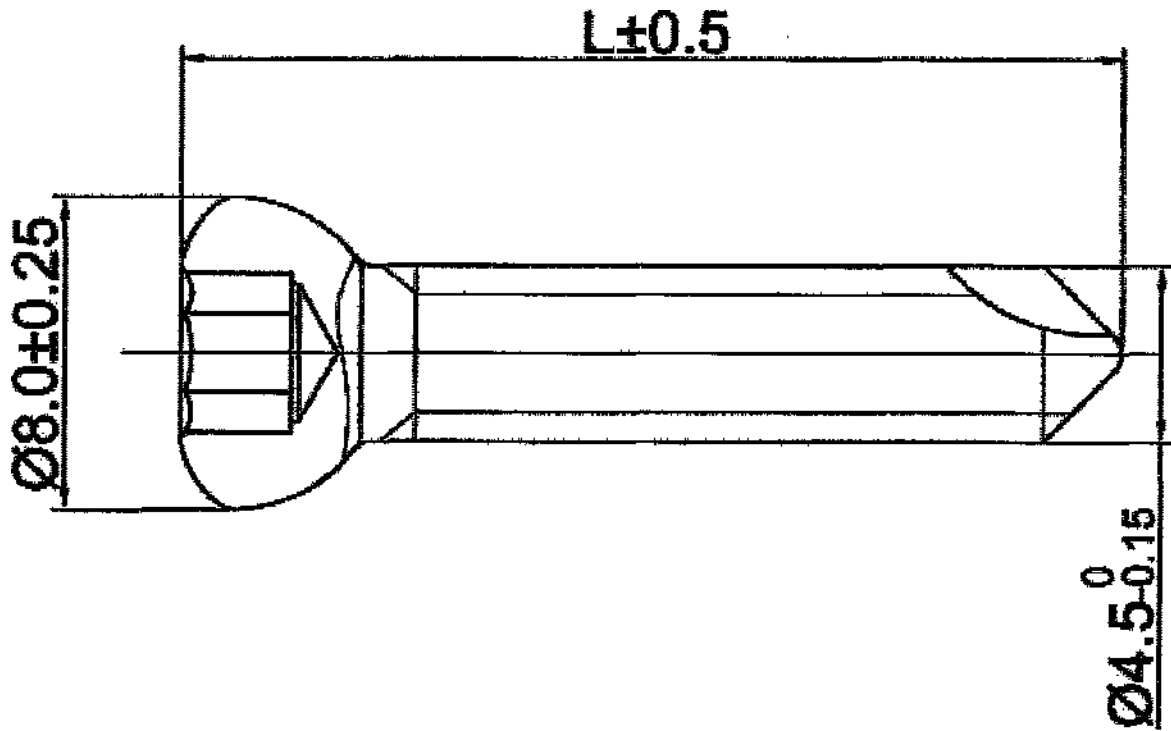

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с допусками, мм ± мм	Шероховатость, мкм не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$4,5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,15 \end{smallmatrix}$	$8 \pm 0,25$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 14 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 14 мм	14	T=0.65±20% S=1.17±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 16 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 16 мм	16	T=0.74±20% S=1.33±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 18 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 18 мм	18	T=0.83±20% S=1.5±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 20 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 20 мм	20	T=0.93±20% S=1.67±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 22 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 22 мм	22	T=1.02±20% S=1.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 24 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 24 мм	24	T=1.11±20% S=2±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 26 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 26 мм	26	T=1.2±20% S=2.17±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 28 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 28 мм	28	T=1.3±20% S=2.33±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 30 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 30 мм	30	T=1.39±20% S=2.5±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 32 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 32 мм	32	T=1.48±20% S=2.67±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 34 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 34 мм	34	T=1.58±20% S=2.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 36 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 36 мм	36	T=1.67±20% S=3.0±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 38 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 38 мм	38	T=1.76±20% S=3.17±20%

Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 40 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 40 мм	40	T=1.85±20% S=3.3±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 42 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 42 мм	42	T=1.95±20% S=3.5±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 44 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 44 мм	44	T=2.04±20% S=3.67±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 46 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 46 мм	46	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 48 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 48 мм	48	T=2.22±20% S=4±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 50 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 50 мм	50	T=2.32±20% S=4.17±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 52 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 52 мм	52	T=2.41±20% S=4.33±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 54 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 54 мм	54	T=2.5±20% S=4.5±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 56 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 56 мм	56	T=2.6±20% S=4.67±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 58 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 58 мм	58	T=2.69±20% S=4.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 60 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 60 мм	60	T=2.78±20% S=5±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 62 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 62 мм	62	T=2.87±20% S=5.17±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 64 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 64 мм	64	T=2.97±20% S=5.33±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 66 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 66 мм	66	T=3.06±20% S=5.5±20%

Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 68 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 68 мм	68	T=3.15±20% S=5.67±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 70 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 70 мм	70	T=3.24±20% S=5.83±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 72 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 72 мм	72	T=3.34±20% S=6±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 74 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 74 мм	74	T=3.43±20% S=6.17±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 76 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 76 мм	76	T=3.52±20% S=6.33±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 78 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 78 мм	78	T=3.62±20% S=6.5±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 80 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 80 мм	80	T=3.71±20% S=6.67±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 85 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 85 мм	85	T=3.62±20% S=6.51±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 90 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 90 мм	90	T=3.84±20% S=6.9±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 95 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 95 мм	95	T=4.05±20% S=7.28±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, length: 100 mm	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, длина: 100 мм	100	T=4.26±20% S=7.66±20%

Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 20-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 20-40 mm increments 2 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
4,5 ⁰ _{-0,15}	3,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 20	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 20	20	T=0.65±20% S=1.2±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	22	T=0.7±20% S=1.25±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 24	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 24	24	T=0.75±20% S=1.35±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 26	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 26	26	T=0.8±20% S=1.45±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 28	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 28	28	T=0.9±20% S=1.6±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 30	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 30	30	T=0.95±20% S=1.7±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 32	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 32	32	T=1±20% S=1.8±20%
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 34	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 34	34	T=1.05±20% S=1.9±20%

Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 36	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 36	36	$T=1.1\pm 20\%$ $S=2.0\pm 20\%$
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 38	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 38	38	$T=1.15\pm 20\%$ $S=2.05\pm 20\%$
Screw Cortex HAQ 03 3.5 mm, Self-tapping length: 40	Винт кортикальный HAQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 40	40	$T=1.2\pm 20\%$ $S=2.15\pm 20\%$


Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22-44 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22-44 mm increments 2 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
4,5 ⁰ _{-0,15}	3,5 ^{+0,25} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	22	T=1.2±20% S=2.15±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	24	T=1.3±20% S=2.35±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	26	T=1.35±20% S=2.4±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	28	T=1.45±20% S=2.6±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	30	T=1.5±20% S=2.7±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	32	T=1.6±20% S=2.9±20%
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	34	T=1.65±20% S=3.0±20%

Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	36	$T=1.75\pm 20\%$ $S=3.15\pm 20\%$
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	38	$T=1.8\pm 20\%$ $S=3.25\pm 20\%$
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	40	$T=1.9\pm 20\%$ $S=3.4\pm 20\%$
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	42	$T=2.0\pm 20\%$ $S=3.6\pm 20\%$
Screw Cortex HAQ 03 4.5 mm, Self-tapping length: 22	Винт кортикальный HAQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22	44	$T=2.1\pm 20\%$ $S=3.8\pm 20\%$


Винт кортикальный НАQ 02 1,5 мм мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex НАQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 4, 5, 6, 7, 8-18 mm increments 2 mm

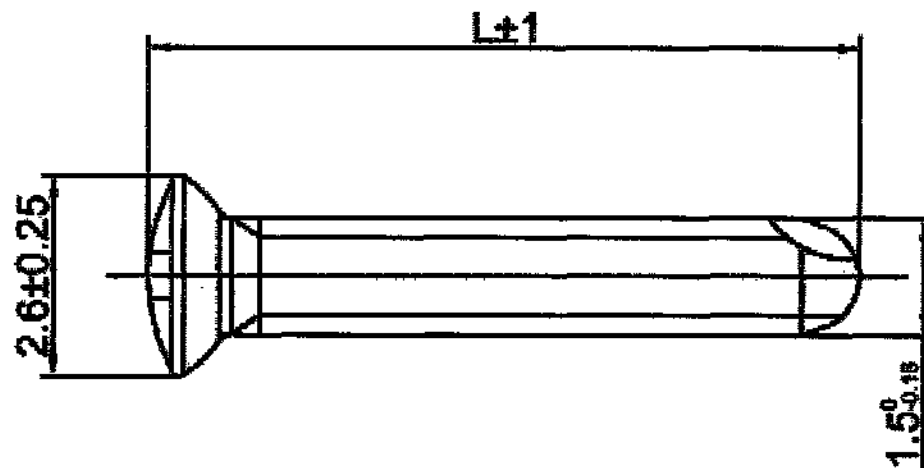

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с допусками, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
1,5 ⁰ _{-0,15}	2,6 ± 0,25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± t, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 4 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4 мм	4	T=0.04±20% S=0.07±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 5 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 5 мм	5	T=0.04±20% S=0.07±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 6 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 6 мм	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 7 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 7 мм	7	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 8 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 8 мм	8	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 10 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 10 мм	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 12 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 12 мм	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 14 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 14 мм	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 16 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 16 мм	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – tapping, length: 18 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 18 мм	18	T=0.12±20% S=0.22±20%


Винт кортикальный НАQ 02 2,0 мммм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex НАQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 4, 5, 6, 7, 8-18 mm increments 2 mm

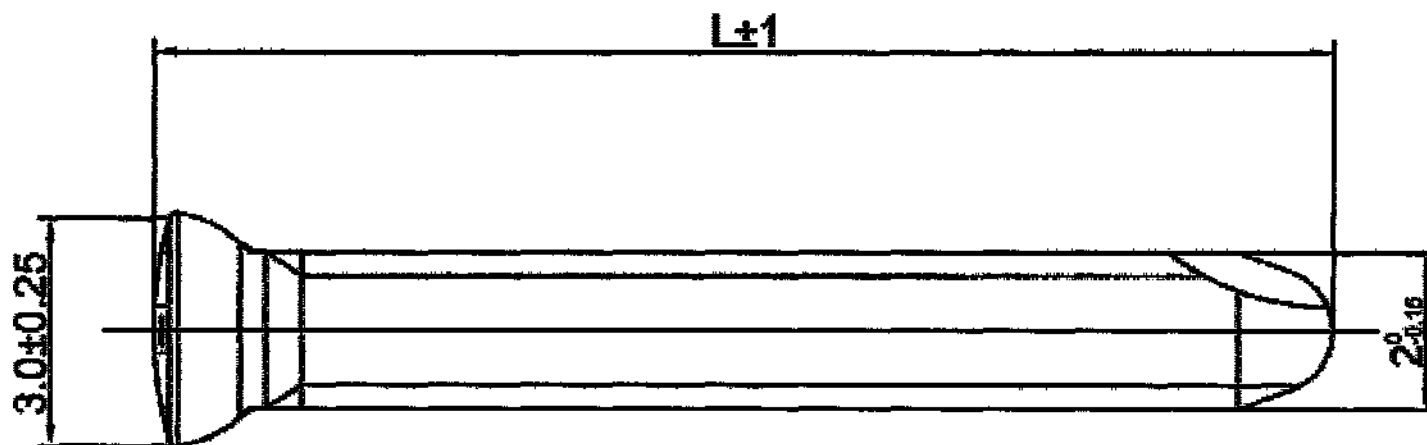

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$2.0_{-0.15}^{+0}$	3 ± 0.25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± T, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 4 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4 мм	4	T=0.04±20% S=0.07±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 5 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 5 мм	5	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 6 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 6 мм	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 7 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 7 мм	7	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 8 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 8 мм	8	T=0.07±20% S=0.12±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 10 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 10 мм	10	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 12 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 12 мм	12	T=0.11±20% S=0.19±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 14 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 14 мм	14	T=0.12±20% S=0.21±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 16 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 16 мм	16	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.0 mm, cruciform, self – tapping, length: 18 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 18 мм	18	T=0.16±20% S=0.28±20%


Винт кортикальный НАQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex НАQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 4, 5, 6, 7, 8-18 mm increments 2 mm

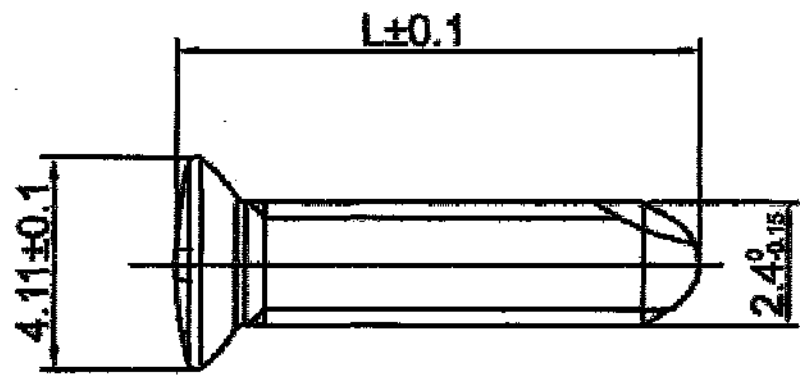

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$2.4_{-0.15}^0$	4.11 ± 0.1	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L±1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 4 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4 мм	4	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 5 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 5 мм	5	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 6 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 6 мм	6	T=0.08±20% S=0.14±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 7 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 7 мм	7	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 8 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 8 мм	8	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 10 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 10 мм	10	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 12 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 12 мм	12	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 14 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 14 мм	14	T=0.2±20% S=0.36±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 16 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 16 мм	16	T=0.23±20% S=0.42±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – tapping, length: 18 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 18 мм	18	T=0.26±20% S=0.47±20%


Винт кортикальный НАQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4-8 мм с шагом 1 мм / Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 4-8 mm increments 1 mm

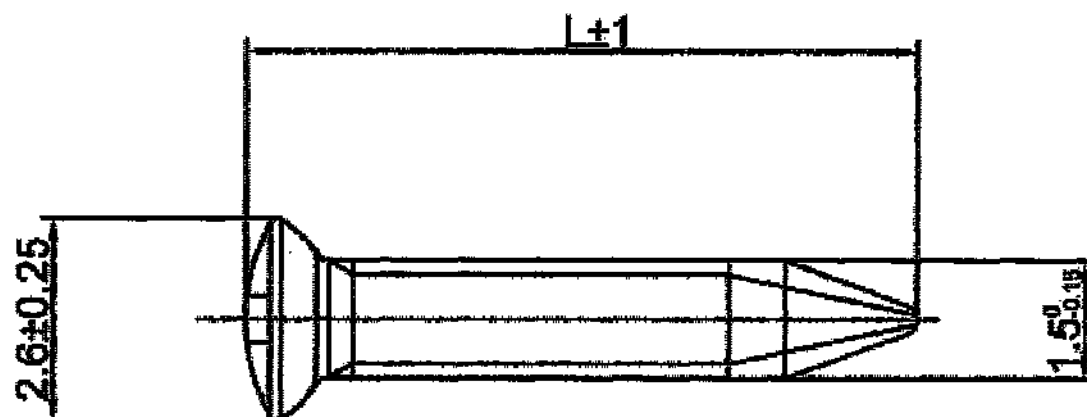

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm , not more
$1.5^{+0}_{-0.15}$	2.6 ± 0.25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	$L \pm 1$, mm (mm)	Масса с погрешностями, $g \pm g$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 4 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4 мм	4	T=0.04±20% S=0.07±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 5 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 5 мм	5	T=0.04±20% S=0.07±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 6 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 6 мм	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 7 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 7 мм	7	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 8 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 8 мм	8	T=0.06±20% S=0.11±20%


Винт кортикальный НАQ 02 2,0 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4-8 мм с шагом 1 мм / Screw Cortex НАQ 02 2.0 mm, cruciform, self – drilling, length: 4-8 mm increments 1 mm

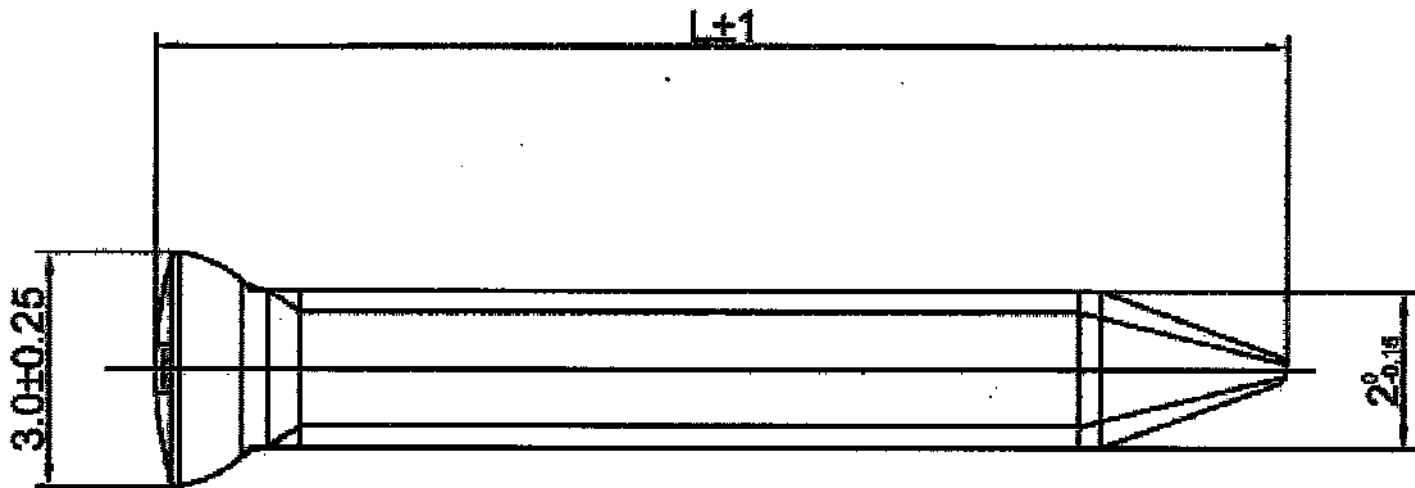

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
$2 - 0.15$	3 ± 0.25	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	$L \pm l$, мм (mm)	Масса с погрешностями, г $\pm$ г / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 4 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4 мм	4	T=0.04 $\pm$ 20% S=0.07 $\pm$ 20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 5 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 5 мм	5	T=0.05 $\pm$ 20% S=0.09 $\pm$ 20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 6 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 6 мм	6	T=0.05 $\pm$ 20% S=0.09 $\pm$ 20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 7 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 7 мм	7	T=0.06 $\pm$ 20% S=0.11 $\pm$ 20%
Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, cruciform, self – drilling, length: 8 mm	Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 8 мм	8	T=0.07 $\pm$ 20% S=0.12 $\pm$ 20%

Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4-8 мм с шагом 1 мм / Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 4-8 mm increments 1 mm

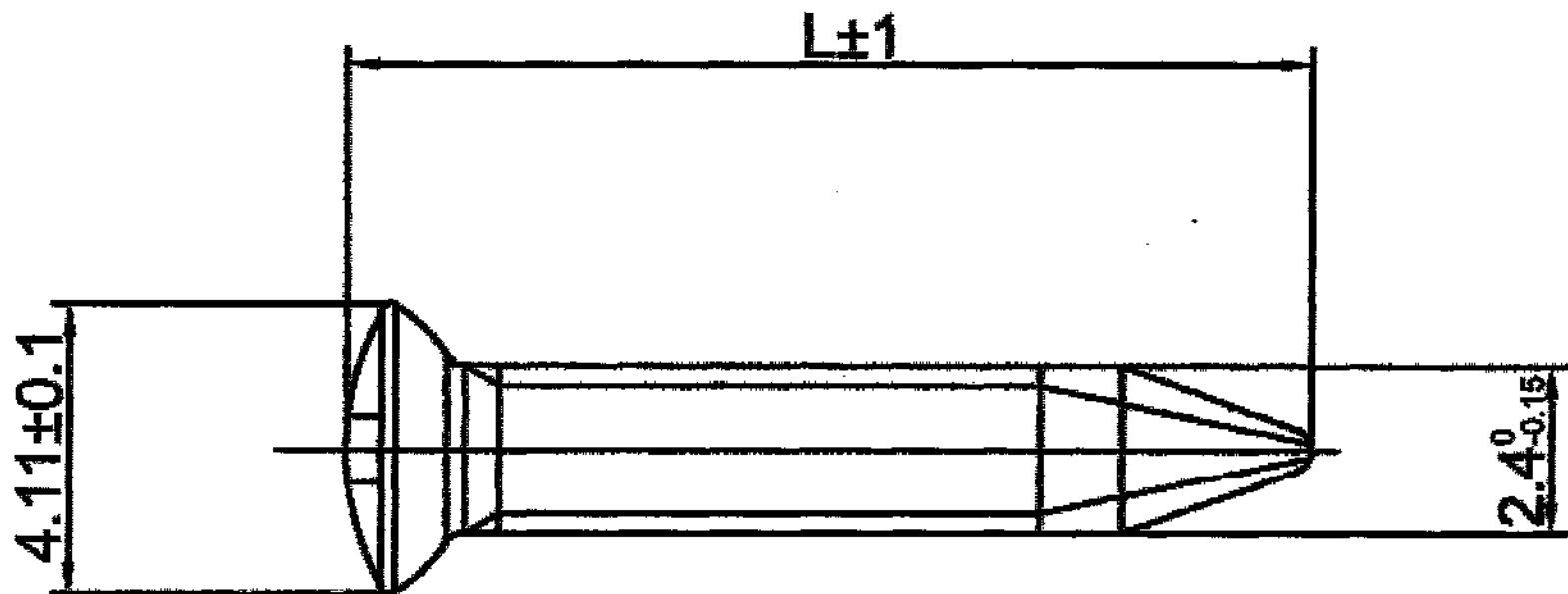

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$2.4^{\circ}_{-0.15}$	4.11 ± 0.1	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 4 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4 мм	4	T=0.05±20% S=0.09±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 5 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 5 мм	5	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 6 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 6 мм	6	T=0.08±20% S=0.14±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 7 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 7 мм	7	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Cortex HAQ 02 2.4 mm, cruciform, self – drilling, length: 8 mm	Винт кортикальный HAQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 8 мм	8	T=0.11±20% S=0.20±20%


Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 6-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 6-40 mm increments 2 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
2,4 ⁰ _{-0,15}	2,4 ^{+0,25} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 6	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 6	6	T=0.08±20% S=0.15±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 8	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 8	8	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 10	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 10	10	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 12	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 12	12	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 14	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 14	14	T=0.2±20% S=0.36±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 16	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 16	16	T=0.23±20% S=0.42±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 18	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 18	18	T=0.26±20% S=0.47±20%
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 20	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 20	20	T=0.29±20% S=0.53±20%

Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 22	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 22	22	$T=0.32\pm20\%$ $S=0.58\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 24	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 24	24	$T=0.35\pm20\%$ $S=0.63\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 26	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 26	26	$T=0.38\pm20\%$ $S=0.69\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 28	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 28	28	$T=0.41\pm20\%$ $S=0.74\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 30	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 30	30	$T=0.44\pm20\%$ $S=0.79\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 32	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 32	32	$T=0.47\pm20\%$ $S=0.85\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 34	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 34	34	$T=0.5\pm20\%$ $S=0.9\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 36	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 36	36	$T=0.53\pm20\%$ $S=0.96\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 38	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 38	38	$T=0.56\pm20\%$ $S=1.0\pm20\%$
Screw Cortex HAQ06 2.4 mm, low profile, length: 40	Винт кортикальный HAQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 40	40	$T=0.59\pm20\%$ $S=1.06\pm20\%$

Винт кортикальный HAQ02, 2,0 мм, низкий профиль, длина 6-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex HAQ02 2.0mm, low profile, length: 6-40 mm increments 2 mm

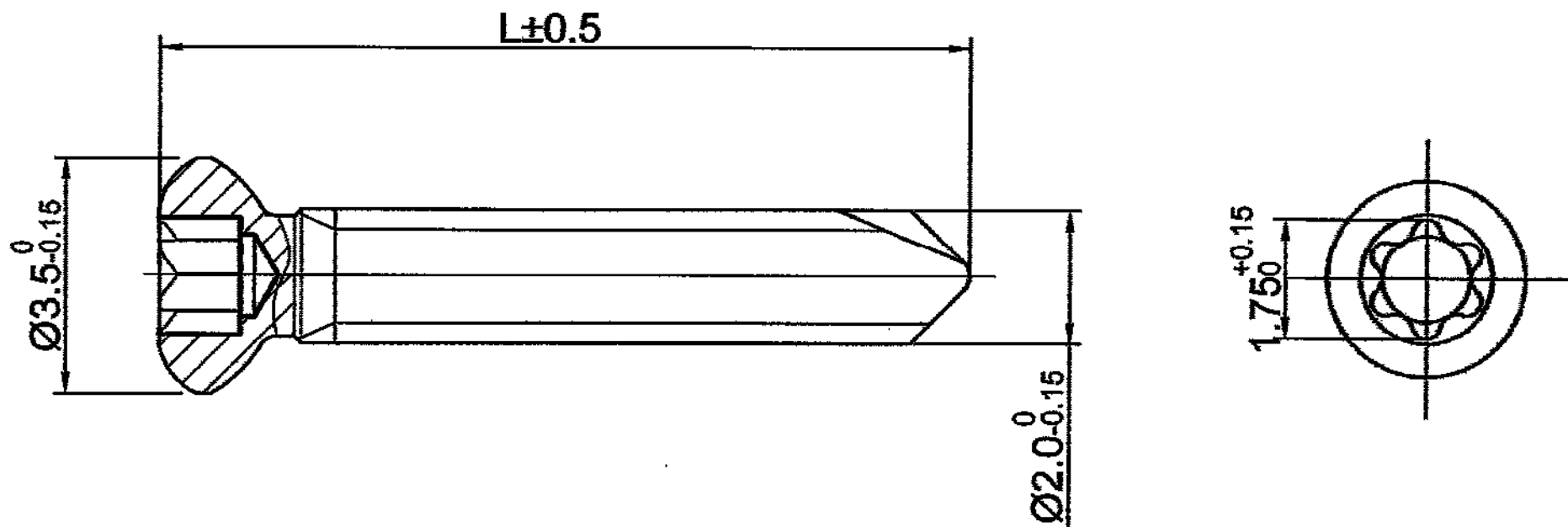


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, mm, not more
2,0 ⁰ _{-0,15}	3,5 ⁰ _{-0,15}	1,75 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L±0,5 мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г Mass with tolerances, g ± g
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 6 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 6 mm	6	T=0.06±20% S=0.11±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 8 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 8 mm	8	T=0.08±20% S=0.14±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 10 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 10 mm	10	T=0.1±20% S=0.18±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 12 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 12 mm	12	T=0.12±20% S=0.22±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 14 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 14 mm	14	T=0.14±20% S=0.25±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 16 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 16 mm	16	T=0.16±20% S=0.29±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 18 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 18 mm	18	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 20 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 20 mm	20	T=0.2±20% S=0.36±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 22 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 22 mm	22	T=0.22±20% S=0.40±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 24 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 24 mm	24	T=0.24±20% S=0.43±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 26 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 26 mm	26	T=0.26±20% S=0.47±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 28 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 28 mm	28	T=0.28±20% S=0.51±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 30 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 30 mm	30	T=0.3±20% S=0.54±20%

Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 32 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 32 mm	32	T=0.32±20% S=0.58±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 34 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 34 mm	34	T=0.34±20% S=0.62±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 36 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 36 mm	36	T=0.36±20% S=0.65±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 38 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 38 mm	38	T=0.38±20% S=0.68±20%
Винт кортикальный HAQ 04 2,0 мм, длина: 40 мм	Screw Cortex HAQ 04 2.0 mm, length: 40 mm	40	T=0.4±20% S=0.72±20%

Винт кортикальный НАQ02, 1,5 мм, низкий профиль, длина 6-30 мм с шагом 2 мм / Screw Cortex HAQ02 1.5 mm, low profile, length: 6-30 mm increments 2 mm

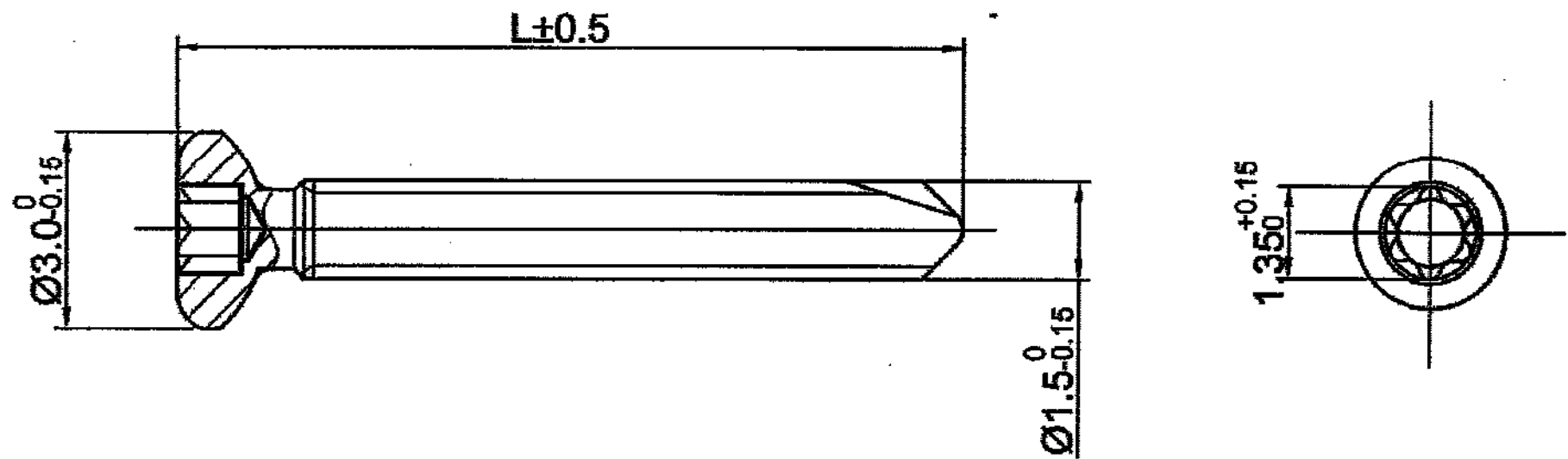


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hole's diameter, mm	Roughness, μm, not more
$1.5_{-0.15}^0$	$3_{-0.15}^0$	$1.35_{-0}^{+0.15}$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L=0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 6 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 6 mm	6	T=0.05±20% S=0.09±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 8 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 8 mm	8	T=0.06±20% S=0.11±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 10 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 10 mm	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 12 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 12 mm	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 14 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 14 mm	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 16 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 16 mm	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 18 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 18 mm	18	T=0.12±20% S=0.22±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 20 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 20 mm	20	T=0.13±20% S=0.24±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 22 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 22 mm	22	T=0.14±20% S=0.25±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 24 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 24 mm	24	T=0.15±20% S=0.27±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 26 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 26 mm	26	T=0.17±20% S=0.31±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 28 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 28 mm	28	T=0.18±20% S=0.32±20%
Винт кортикальный HAQ 02 1,5 мм, длина: 30 мм	Screw Cortex HAQ 02 1.5 mm, length: 30 mm	30	T=0.2±20% S=0.36±20%

ВИНТ СПОНГИОЗНЫЙ / Screw Cancellous

ВИНТ СПОНГИОЗНЫЙ HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 10-70 мм с шагом 2 мм, 55 мм / Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 10 -70 mm increments 2 mm, 55 mm

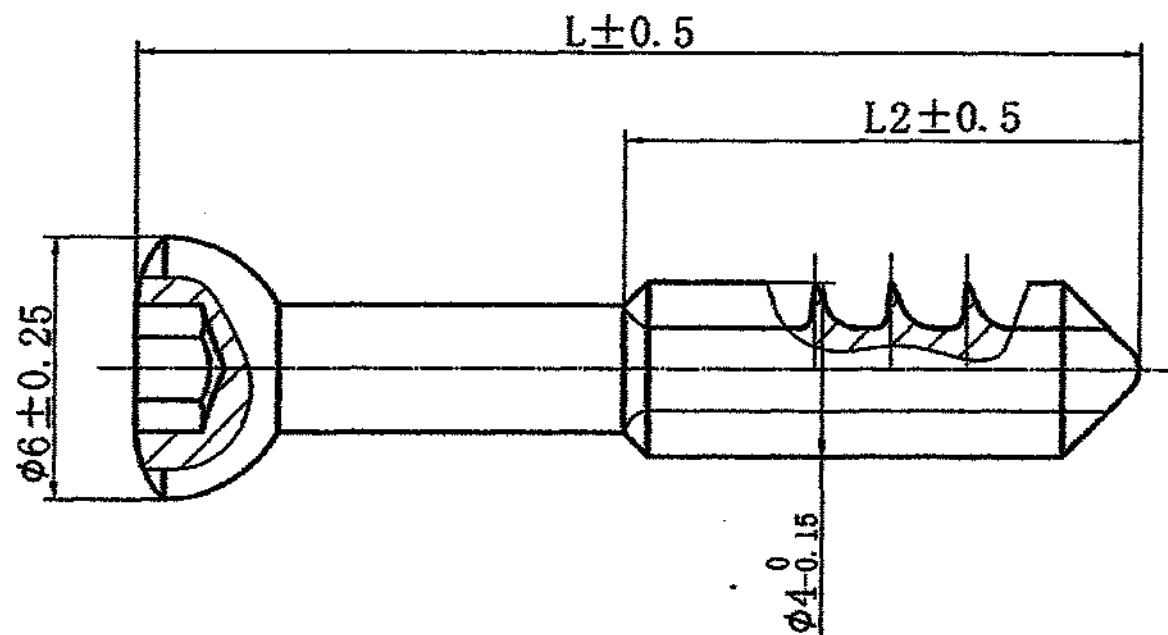


Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Резьба / Thread Макс диаметр, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Max Diameter, mm	Roughness, μm, not more
$6_{-0.15}^{-0.05}$	$4_{-0.12}^0$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	L2 ±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 10 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 10 мм	10	5	T=0.31±20% S=0.56±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 12 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 12 мм	12	6	T=0.38±20% S=0.68±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 14 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 14 мм	14	7	T=0.44±20% S=0.79±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 16 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 16 мм	16	8	T=0.50±20% S=0.90±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 18 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 18 мм	18	9	T=0.56±20% S=1.01±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 20 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 20 мм	20	10	T=0.63±20% S=1.13±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 22 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 22 мм	22	11	T=0.69±20% S=1.24±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 24 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 24 мм	24	12	T=0.75±20% S=1.35±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 26 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 26 мм	26	13	T=0.81±20% S=1.46±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 28 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 28 мм	28	14	T=0.88±20% S=1.58±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 30 мм	30	15	T=0.94±20% S=1.69±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 32 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 32 мм	32	16	T=1±20% S=1.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 34 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 34 мм	34	17	T=1.06±20% S=1.91±20%

Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 36 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 36 мм	36	188	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 38 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 38 мм	38	19	T=1.19±20% S=2.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 40 мм	40	20	T=1.25±20% S=2.25±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 42 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 42 мм	42	21	T=1.32±20% S=2.36±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 44 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 44 мм	44	22	T=1.38±20% S=2.48±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 46 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 46 мм	46	23	T=1.44±20% S=2.59±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 48 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 48 мм	48	24	T=1.5±20% S=2.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 50 мм	50	25	T=1.57±20% S=2.82±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 52 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 52 мм	52	26	T=1.63±20% S=2.93±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 54 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 54 мм	54	27	T=1.69±20% S=3.04±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 55 мм	55	27,5	T=1.72±20% S=3.1±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 56 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 56 мм	56	28	T=1.75±20% S=3.15±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 58 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 58 мм	58	29	T=1.82±20% S=3.27±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 60 мм	60	30	T=1.88±20% S=3.38±20%

Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 62 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 62 мм	62	31	T=1.94±20% S=3.49±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 64 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 64 мм	64	32	T=2±20% S=3.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 66 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 66 мм	66	33	T=2.07±20% S=3.72±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 68 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 68 мм	68	34	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cancellous HBQ03 partially threaded 4.0 mm length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 70 мм	70	35	T=2.19±20% S=3.94±20%

Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 10-70 мм с шагом 2 мм, 55 мм / Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 10 -70 mm increments 2 mm, 55 mm

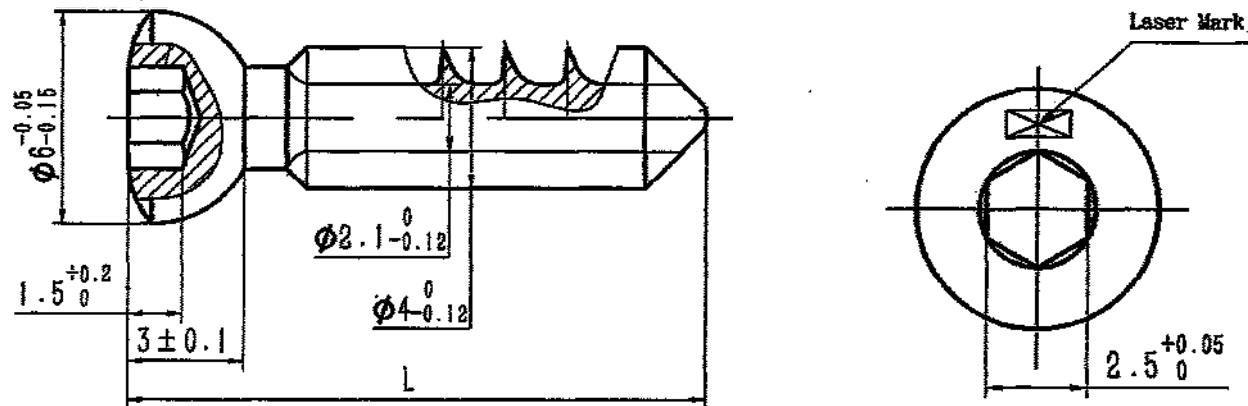


Диаметр отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Длина отверстия с погрешностями, мм $\pm$ мм	Ширина головки винта с погрешностями, мм $\pm$ мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм $\pm$ мм	Резьба / Thread		Шероховатость, мкм, не более
Diameter hole with tolerances, mm $\pm$ mm	Length hole with tolerances, mm $\pm$ mm	Width of screw head with tolerances, mm $\pm$ mm	Diameter of screw head with tolerances, mm $\pm$ mm	Max Diameter, mm	Min Diameter, mm	Roughness, μ m, not more
$2,5^{+0.05}_0$	$1,5^{+0.2}_0$	$3 \pm 0,1$	$6^{+0.05}_{-0.15}$	$4^{+0}_{-0.12}$	$2,1^{+0}_{-0.12}$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 0.5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 10 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 10 мм	10	T=0.31±20% S=0.56±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 12 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 12 мм	12	T=0.38±20% S=0.68±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 14 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 14 мм	14	T=0.44±20% S=0.79±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 16 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 16 мм	16	T=0.50±20% S=0.90±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 18 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 18 мм	18	T=0.56±20% S=1.01±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 20 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 20 мм	20	T=0.63±20% S=1.13±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 22 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 22 мм	22	T=0.69±20% S=1.24±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 24 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 24 мм	24	T=0.75±20% S=1.35±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 26 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 26 мм	26	T=0.81±20% S=1.46±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 28 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 28 мм	28	T=0.88±20% S=1.58±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 30 мм	30	T=0.94±20% S=1.69±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 32 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 32 мм	32	T=1±20% S=1.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 34 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 34 мм	34	T=1.06±20% S=1.91±20%

Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 36 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 36 мм	36	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 38 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 38 мм	38	T=1.19±20% S=2.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 40 мм	40	T=1.25±20% S=2.25±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 42 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 42 мм	42	T=1.32±20% S=2.36±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 44 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 44 мм	44	T=1.38±20% S=2.48±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 46 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 46 мм	46	T=1.44±20% S=2.59±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 48 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 48 мм	48	T=1.5±20% S=2.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 50 мм	50	T=1.57±20% S=2.82±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 52 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 52 мм	52	T=1.63±20% S=2.93±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 54 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 54 мм	54	T=1.69±20% S=3.04±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 55 мм	55	T=1.72±20% S=3.1±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 56 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 56 мм	56	T=1.75±20% S=3.15±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 58 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 58 мм	58	T=1.82±20% S=3.27±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 60 мм	60	T=1.88±20% S=3.38±20%

Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 62 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 62 мм	62	T=1.94±20% S=3.49±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 64 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 64 мм	64	T=2±20% S=3.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 66 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 66 мм	66	T=2.07±20% S=3.72±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 68 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 68 мм	68	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cancellous HBQ03 fully threaded 4.0 mm length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 70 мм	70	T=2.19±20% S=3.94±20%

Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm

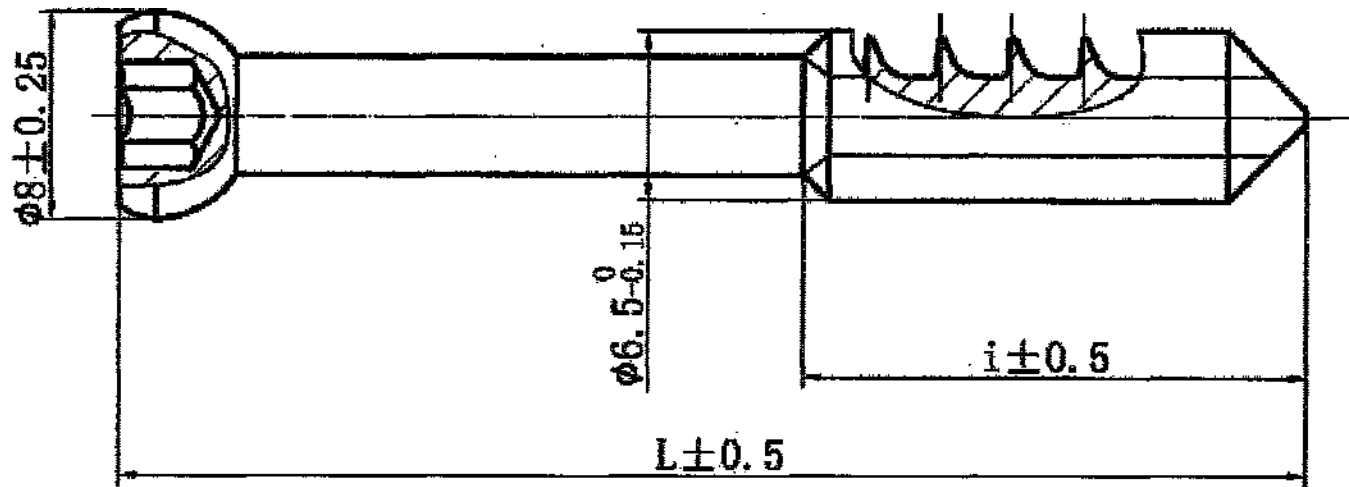


Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$6.5^{+0}_{-0.15}$	8 ± 0.25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0.5, mm (mm)	l ±0.5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 25 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 25 мм	25	19	T=1.76±20% S=3.17±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 30 мм	30	24	T=2.11±20% S=3.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 35 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 35 мм	35	29	T=2.47±20% S=4.43±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 40 мм	40	32	T=2.82±20% S=5.07±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 45 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 45 мм	45	32	T=3.17±20% S=5.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 50 мм	50	32	T=3.52±20% S=6.33±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 55 мм	55	32	T=3.88±20% S=6.97±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 60 мм	60	32	T=4.23±20% S=7.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 65 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 65 мм	65	32	T=4.58±20% S=8.24±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 70 мм	70	32	T=4.93±20% S=8.87±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 75 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 75 мм	75	32	T=5.28±20% S=9.5±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 80 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 80 мм	80	32	T=5.64±20% S=10.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 85 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 85 мм	85	32	T=6±20% S=10.8±20%

Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 90 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 90 мм	90	32	T=6.35±20% S=11.4±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 95 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 95 мм	95	32	T=6.7±20% S=12.1±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 100 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 100 мм	100	32	T=7.05±20% S=12.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 105 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 105 мм	105	32	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 110 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 110 мм	110	32	T=7.75±20% S=14.0±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 115 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 115 мм	115	32	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 32 threaded, length: 120 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 120 мм	120	32	T=8.45±20% S=15.2±20%

Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm

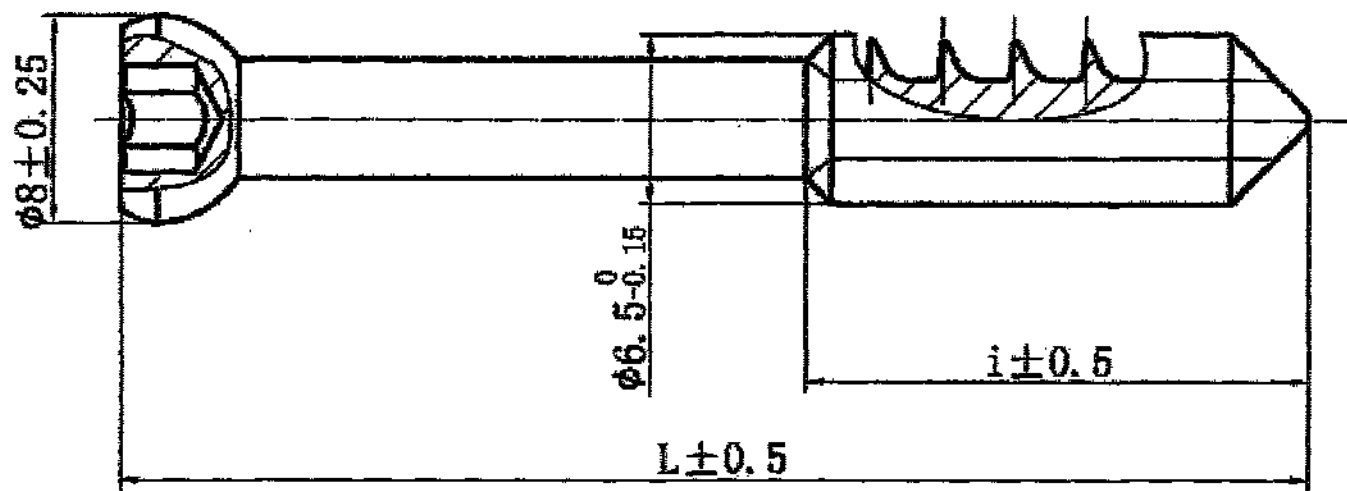


Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
6,5 ⁰ _{-0,15}	8 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 25 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 25 мм	25	16	T=1.76±20% S=3.17±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 30 мм	30	16	T=2.11±20% S=3.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 35 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 35 мм	35	16	T=2.47±20% S=4.43±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 40 мм	40	16	T=2.82±20% S=5.07±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 45 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 45 мм	45	16	T=3.17±20% S=5.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 50 мм	50	16	T=3.52±20% S=6.33±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 55 мм	55	16	T=3.88±20% S=6.97±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 60 мм	60	16	T=4.23±20% S=7.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 65 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 65 мм	65	16	T=4.58±20% S=8.24±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 70 мм	70	16	T=4.93±20% S=8.87±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 75 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 75 мм	75	16	T=5.28±20% S=9.5±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 80 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 80 мм	80	16	T=5.64±20% S=10.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 85 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 85 мм	85	16	T=6±20% S=10.8±20%

Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 90 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 90 мм	90	16	T=6.35±20% S=11.4±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 95 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 95 мм	95	16	T=6.7±20% S=12.1±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 100 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 100 мм	100	16	T=7.05±20% S=12.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 105 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 105 мм	105	16	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 110 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 110 мм	110	16	T=7.75±20% S=14.0±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 115 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 115 мм	115	16	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, 16 threaded, length: 120 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 120 мм	120	16	T=8.45±20% S=15.2±20%

Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 25-120 mm increments 5 mm

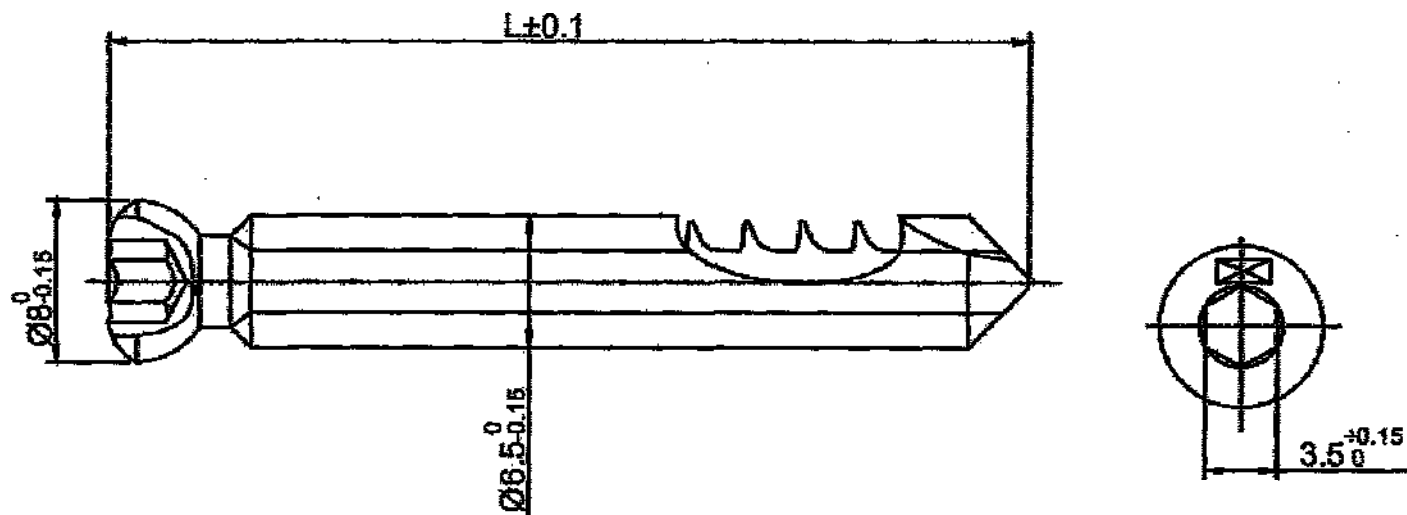


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Резьба / Thread Диаметр, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Diameter, mm	Roughness, μm, not more
3,5 ^{+0.15} ₀	8 ⁰ _{-0.15}	6,5 ⁰ _{-0.05}	0,4 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 1, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 25 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 25 мм	25	T=1.76±20% S=3.17±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 30 мм	30	T=2.11±20% S=3.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 35 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 35 мм	35	T=2.47±20% S=4.43±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 40 мм	40	T=2.82±20% S=5.07±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 45 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 45 мм	45	T=3.17±20% S=5.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 50 мм	50	T=3.52±20% S=6.33±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 55 мм	55	T=3.88±20% S=6.97±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 60 мм	60	T=4.23±20% S=7.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 65 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 65 мм	65	T=4.58±20% S=8.24±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 70 мм	70	T=4.93±20% S=8.87±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 75 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 75 мм	75	T=5.28±20% S=9.5±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 80 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 80 мм	80	T=5.64±20% S=10.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 85 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 85 мм	85	T=6±20% S=10.8±20%

Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 90 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 90 мм	90	T=6.35±20% S=11.4±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 95 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 95 мм	95	T=6.7±20% S=12.1±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 100 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 100 мм	100	T=7.05±20% S=12.7±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 105 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 105 мм	105	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 110 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 110 мм	110	T=7.75±20% S=14.0±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 115 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 115 мм	115	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cancellous HBQ03 6.5 mm, fully threaded, length: 120 mm	Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 120 мм	120	T=8.45±20% S=15.2±20%

Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 25 -120 mm increments 5 mm

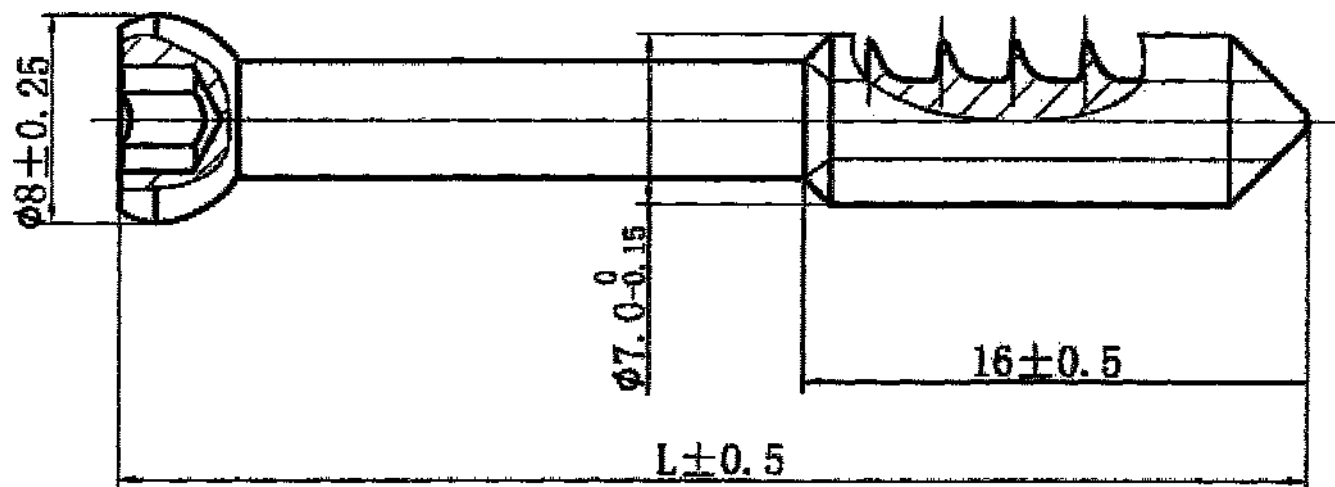


Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
$7_{-0.15}^0$	$8 \pm 0,25$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±0,5, мм (mm)	l±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 25 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 25 мм	25	16	T=2.63±20% S=4.73±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 30 мм	30	16	T=3.16±20% S=5.68±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 35 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 35 мм	35	16	T=3.68±20% S=6.62±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 40 мм	40	16	T=4.21±20% S=7.57±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 45 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 45 мм	45	16	T=4.74±20% S=8.52±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 50 мм	50	16	T=5.26±20% S=9.46±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 55 мм	55	16	T=5.79±20% S=10.41±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 60 мм	60	16	T=6.31±20% S=11.36±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 65 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 65 мм	65	16	T=6.84±20% S=12.3±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 70 мм	70	16	T=7.37±20% S=13.25±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 75 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 75 мм	75	16	T=7.89±20% S=14.19±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 80 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 80 мм	80	16	T=8.42±20% S=15.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 85 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 85 мм	85	16	T=8.95±20% S=16.09±20%

Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 90 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 90 мм	90	16	T=9.47±20% S=17.03±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 95 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 95 мм	95	16	T=10±20% S=18±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 100 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 100 мм	100	16	T=10.52±20% S=18.93±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 105 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 105 мм	105	16	T=11.05±20% S=19.87±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 110 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 110 мм	110	16	T=11.58±20% S=20.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 115 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 115 мм	115	16	T=12.1±20% S=21.76±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 16 threaded, length: 120 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 120 мм	120	16	T=12.63±20% S=22.71±20%

Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 40-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 40 -120 mm increments 5 mm

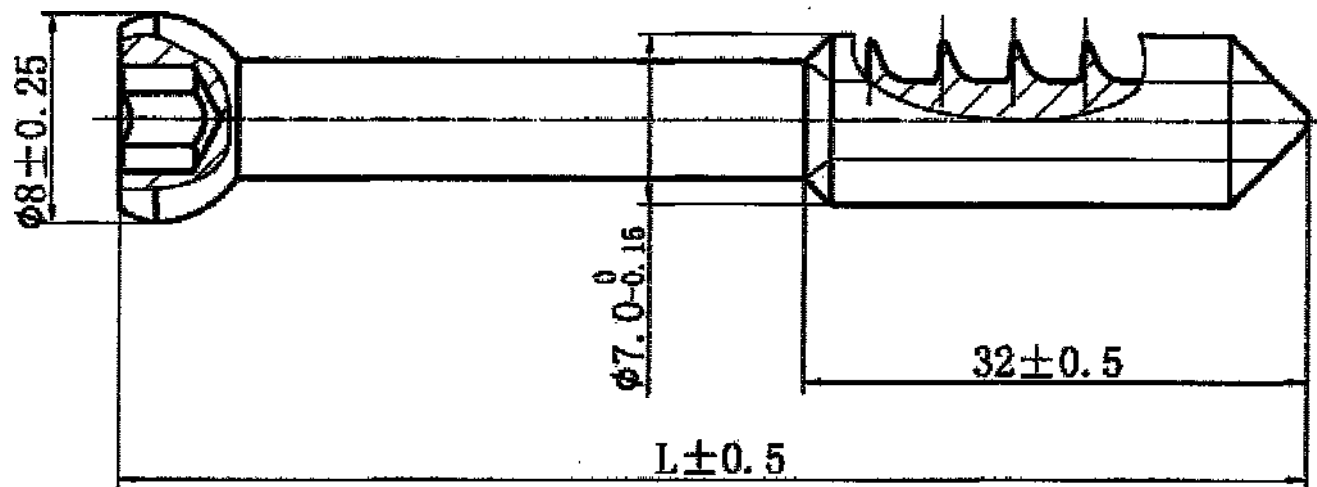


Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$7^{0}_{-0.15}$	8 ± 0.25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$\pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $r \pm r$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 40 мм	40	32	$T=4.21 \pm 20\%$ $S=7.57 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 45 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 45 мм	45	32	$T=4.74 \pm 20\%$ $S=8.52 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 50 мм	50	32	$T=5.26 \pm 20\%$ $S=9.46 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 55 мм	55	32	$T=5.79 \pm 20\%$ $S=10.41 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 60 мм	60	32	$T=6.31 \pm 20\%$ $S=11.36 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 65 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 65 мм	65	32	$T=6.84 \pm 20\%$ $S=12.3 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 70 мм	70	32	$T=7.37 \pm 20\%$ $S=13.25 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 75 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 75 мм	75	32	$T=7.89 \pm 20\%$ $S=14.19 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 80 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 80 мм	80	32	$T=8.42 \pm 20\%$ $S=15.14 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 85 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 85 мм	85	32	$T=8.95 \pm 20\%$ $S=16.09 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 90 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 90 мм	90	32	$T=9.47 \pm 20\%$ $S=17.03 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 95 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 95 мм	95	32	$T=10 \pm 20\%$ $S=18 \pm 20\%$
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 100 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 100 мм	100	32	$T=10.52 \pm 20\%$ $S=18.93 \pm 20\%$

Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 105 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 105 мм	105	32	T=11.05±20% S=19.87±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 110 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 110 мм	110	32	T=11.58±20% S=20.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 115 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 115 мм	115	32	T=12.1±20% S=21.76±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, 32 threaded, length: 120 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 120 мм	120	32	T=12.63±20% S=22.71±20%

Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм / Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 25-120 mm increments 5 mm

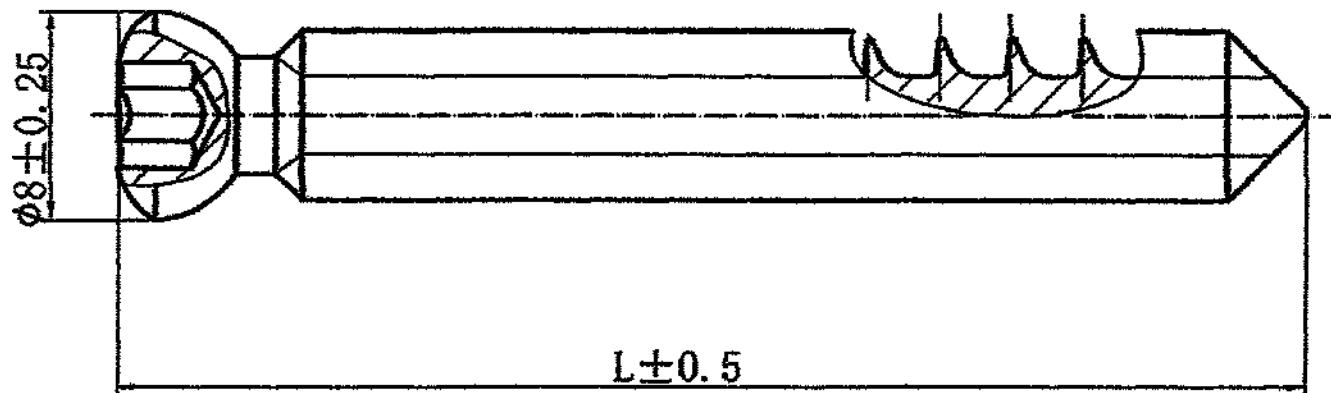


Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$7^{0}_{-0,15}$	$8 \pm 0,25$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0.5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 25 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 25 мм	25	T=2.63±20% S=4.73±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 30 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 30 мм	30	T=3.16±20% S=5.68±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 35 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 35 мм	35	T=3.68±20% S=6.62±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 40 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 40 мм	40	T=4.21±20% S=7.57±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 45 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 45 мм	45	T=4.74±20% S=8.52±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 50 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 50 мм	50	T=5.26±20% S=9.46±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 55 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 55 мм	55	T=5.79±20% S=10.41±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 60 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 60 мм	60	T=6.31±20% S=11.36±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 65 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 65 мм	65	T=6.84±20% S=12.3±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 70 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 70 мм	70	T=7.37±20% S=13.25±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 75 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 75 мм	75	T=7.89±20% S=14.19±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 80 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 80 мм	80	T=8.42±20% S=15.14±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 85 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 85 мм	85	T=8.95±20% S=16.09±20%

Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 90 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 90 мм	90	T=9.47±20% S=17.03±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 95 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 95 мм	95	T=10±20% S=18±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 100 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 100 мм	100	T=10.52±20% S=18.93±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 105 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 105 мм	105	T=11.05±20% S=19.87±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 110 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 110 мм	110	T=11.58±20% S=20.8±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 115 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 115 мм	115	T=12.1±20% S=21.76±20%
Screw Cancellous HBQ03 7.0 mm, fully threaded, length: 120 mm	Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 120 мм	120	T=12.63±20% S=22.71±20%

Винт спонгиозный HAQ 06 4,5 мм, длина: 25 -35 с шагом 5 мм / Screw Cancellous HAQ 06, 4.5 mm, length: 25 -35 mm increments 5 mm

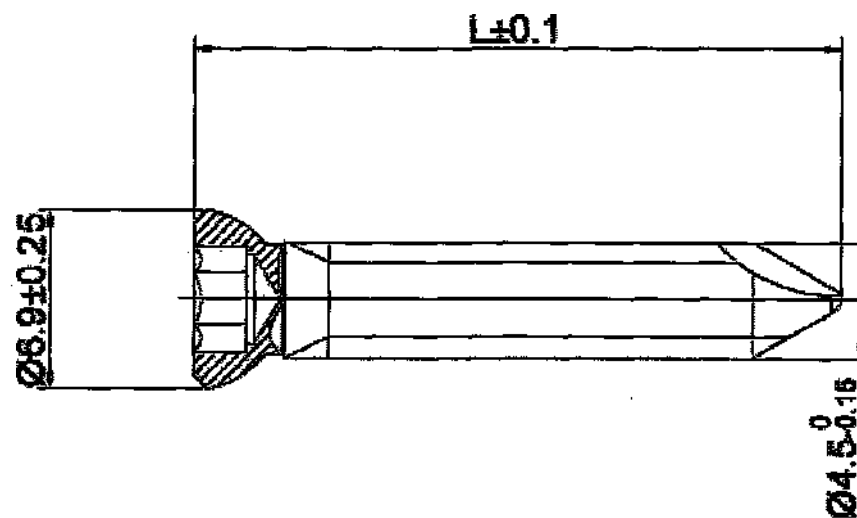

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
4,5 ⁰ _{-0,15}	6,9 ± 0,25	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous HAQ 06, 4.5 mm, length: 25 mm	Винт спонгиозный HAQ 06 4,5 мм, длина: 25 мм	25	T=0.69±20% S=1.24±20%
Screw Cancellous HAQ 06, 4.5 mm, length: 30 mm	Винт спонгиозный HAQ 06 4,5 мм, длина: 30 мм	30	T=0.88±20% S=1.58±20%
Screw Cancellous HAQ 06, 4.5 mm, length: 35 mm	Винт спонгиозный HAQ 06 4,5 мм, длина: 35 мм	35	T=1.06±20% S=1.9±20%

Винт спонгиозный сплошной HAQ06, 4,5 мм, длина: 24 мм, 32 мм / Screw Cancellous Solid HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 24 mm, 32 mm

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
4,5 ⁰ _{-0,15}	3,5 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cancellous Solid HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 24 mm	Винт спонгиозный сплошной HAQ06, 4,5 мм, длина: 24 мм	24	T=1.2±20% S=2.15±20%
Screw Cancellous Solid HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 32 mm	Винт спонгиозный сплошной HAQ06, 4,5 мм, длина: 32 мм	32	T=1.5±20% S=2.7±20%

Винт сжимающий / Screw Compression

Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 10-30 мм с шагом 1 мм / Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 10 -30 mm increments 1 mm

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$3_{-0,15}^0$	$2_{+0,25}^0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 10	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 10	10	T=0.31±20% S=0.55±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 11	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 11	11	T=0.34±20% S=0.61±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 12	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 12	12	T=0.38±20% S=0.66±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 13	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 13	13	T=0.41±20% S=0.72±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 14	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 14	14	T=0.44±20% S=0.77±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 15	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 15	15	T=0.47±20% S=0.83±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 16	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 16	16	T=0.50±20% S=0.88±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 17	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 17	17	T=0.54±20% S=0.94±20%

Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 18	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 18	18	T=0.57±20% S=0.99±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 19	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 19	19	T=0.6±20% S=1.05±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 20	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 20	20	T=0.63±20% S=1.1±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 21	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 21	21	T=0.66±20% S=1.16±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 22	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 22	22	T=0.69±20% S=1.22±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 23	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 23	23	T=0.73±20% S=1.27±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 24	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 24	24	T=0.76±20% S=1.33±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 25	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 25	25	T=0.79±20% S=1.38±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 26	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 26	26	T=0.82±20% S=1.44±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 27	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 27	27	T=0.85±20% S=1.47±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 28	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 28	28	T=0.89±20% S=1.55±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 29	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 29	29	T=0.92±20% S=1.6±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, short threaded, length: 30	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 30	30	T=0.95±20% S=1.66±20%

Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 16-30 мм с шагом 1 мм / Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 16 -30 mm increments 1 mm

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
$3_{-0,15}^0$	$2_{+0,25}^0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 16	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 16	16	T=0.50±20% S=0.88±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 17	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 17	17	T=0.54±20% S=0.94±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 18	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 18	18	T=0.57±20% S=0.99±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 19	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 19	19	T=0.6±20% S=1.05±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 20	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 20	20	T=0.63±20% S=1.1±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 21	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 21	21	T=0.66±20% S=1.16±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 22	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 22	22	T=0.69±20% S=1.22±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 23	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 23	23	T=0.73±20% S=1.27±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 24	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 24	24	T=0.76±20% S=1.33±20%

Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 25	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 25	25	T=0.79±20% S=1.38±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 26	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 26	26	T=0.82±20% S=1.44±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 27	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 27	27	T=0.85±20% S=1.49±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 28	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 28	28	T=0.89±20% S=1.55±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 29	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 29	29	T=0.92±20% S=1.6±20%
Screw Compression HBQ06 3.0 mm, headless, long threaded, length: 30	Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 30	30	T=0.95±20% S=1.66±20%

Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 65-110 мм с шагом 5 мм / Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 -110 mm increments 5 mm

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$4_{-0,15}^0$	$2,4_{-0,25}^{+0,25}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 20 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 20 мм	20	T=1.13±20% S=1.97±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 22 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 22 мм	22	T=1.24±20% S=2.16±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 24 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 24 мм	24	T=1.35±20% S=2.36±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 26 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 26 мм	26	T=1.46±20% S=2.56±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 28 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 28 мм	28	T=1.58±20% S=2.76±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 30 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 30 мм	30	T=1.69±20% S=2.95±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 32 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 32 мм	32	T=1.8±20% S=3.15±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 34 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 34 мм	34	T=1.92±20% S=3.35±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 36 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 36 мм	36	T=2.03±20% S=3.54±20%

Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 38 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 38 мм	38	T=2.14±20% S=3.74±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 40 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 40 мм	40	T=2.26±20% S=3.94±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 42 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 42 мм	42	T=2.37±20% S=4.14±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 44 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 44 мм	44	T=2.48±20% S=4.33±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 46 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 46 мм	46	T=2.59±20% S=4.53±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 48 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 48 мм	48	T=2.71±20% S=4.73±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 50 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 50 мм	50	T=2.82±20% S=4.92±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 52 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 52 мм	52	T=2.93±20% S=5.12±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 54 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 54 мм	54	T=3.05±20% S=5.32±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 56 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 56 мм	56	T=3.16±20% S=5.52±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 58 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 58 мм	58	T=3.27±20% S=5.71±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 60 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 60 мм	60	T=3.39±20% S=5.91±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 65 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 65 мм	65	T=3.67±20% S=6.4±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 70 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 70 мм	70	T=3.95±20% S=6.9±20%

Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 75 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 75 мм	75	T=4.23±20% S=7.3±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 80 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 80 мм	80	T=4.52±20% S=7.88±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 85 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 85 мм	85	T=4.8±20% S=8.38±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 90 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 90 мм	90	T=5.08±20% S=8.87±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 95 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 95 мм	95	T=5.36±20% S=9.36±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 100 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 100 мм	100	T=5.65±20% S=9.85±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 105 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 105 мм	105	T=5.93±20% S=10.35±20%
Screw Compression HBQ06 4.0 mm, headless, long threaded, length: 110 mm	Винт сжимающий HBQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 110 мм	110	T=6.21±20% S=10.84±20%


Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 45-150 мм с шагом 5 мм / Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 45 -150 mm increments 5 mm

Макс. диаметр резьбы, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
6,5 ⁰ _{-0,15}	2,6 ^{+0,25} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L, ±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 45 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 45 мм	45	T=6.71±20% S=11.71±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 50 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 50 мм	50	T=7.46±20% S=13.01±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 55 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 55 мм	55	T=8.2±20% S=14.31±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 60 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 60 мм	60	T=8.95±20% S=15.62±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 65 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 65 мм	65	T=9.7±20% S=16.92±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 70 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 70 мм	70	T=10.44±20% S=18.22±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 75 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 75 мм	75	T=11.19±20% S=19.52±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 80 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 80 мм	80	T=11.93±20% S=20.82±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 85 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 85 мм	85	T=12.68±20% S=22.13±20%

Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 90 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 90 мм	90	T=13.43±20% S=23.43±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 95 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 95 мм	95	T=14.17±20% S=24.73±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 100 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 100 мм	100	T=14.92±20% S=26.03±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 105 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 105 мм	105	T=15.67±20% S=27.33±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 110 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 110 мм	110	T=16.41±20% S=28.63±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 115 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 115 мм	115	T=17.16±20% S=29.94±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 120 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 120 мм	120	T=17.9±20% S=31.24±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 125 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 125 мм	125	T=18.65±20% S=32.54±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 130 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 130 мм	130	T=19.4±20% S=33.84±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 135 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 135 мм	135	T=20.14±20% S=35.14±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 140 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 140 мм	140	T=20.89±20% S=36.44±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 145 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 145 мм	145	T=21.64±20% S=37.75±20%
Screw Compression HBQ06 6.5 mm, headless, 32 threaded, length: 150 mm	Винт сжимающий HBQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 150 мм	150	T=22.38±20% S=39.05±20%

Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 8-30 мм с шагом 1 мм / Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 8 -30 mm increments 1 mm

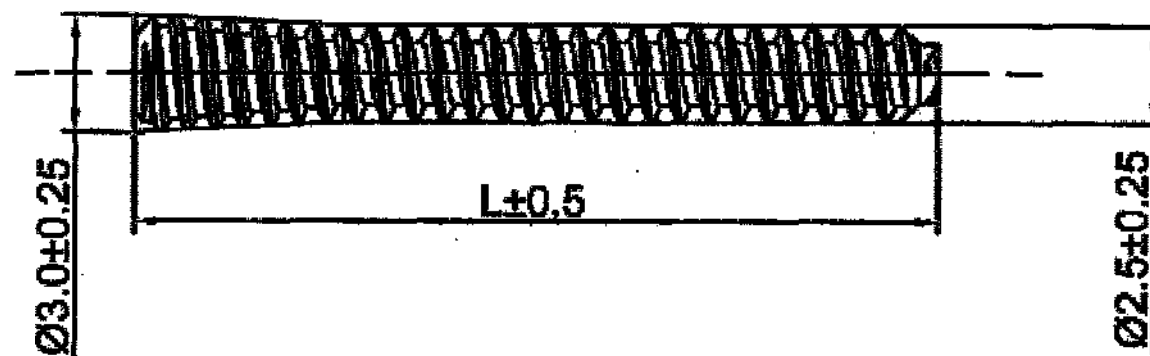


Макс. диаметр, мм	Мин. диаметр, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter, mm	Min Diameter, mm	Roughness, µm, not more
$3,0 \pm 0,25$	$2,5 \pm 0,25$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ₁ ±0,5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 8 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 8 мм	8	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 9 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 9 мм	9	T=0.06±20% S=0.11±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 10 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 10 мм	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 11 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 11 мм	11	T=0.07±20% S=0.13±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 12 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 12 мм	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 13 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 13 мм	13	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 14 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 14 мм	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 15 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 15 мм	15	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 16 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 16 мм	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 17 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 17 мм	17	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 18 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 18 мм	18	T=0.12±20% S=0.22±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 19 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 19 мм	19	T=0.12±20% S=0.22±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 20 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 20 мм	20	T=0.13±20% S=0.24±20%

Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 21 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 21 мм	21	T=0.13±20% S=0.24±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 22 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 22 мм	22	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 23 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 23 мм	23	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 24 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 24 мм	24	T=0.15±20% S=0.27±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 25 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 25 мм	25	T=0.16±20% S=0.29±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 26 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 26 мм	26	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 27 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 27 мм	27	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 28 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 28 мм	28	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 29 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 29 мм	29	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless - MICRO length: 30 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИКРО, длина: 30 мм	30	T=0.2±20% S=0.36±20%


Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм / Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 10 -30 mm increments 2 mm

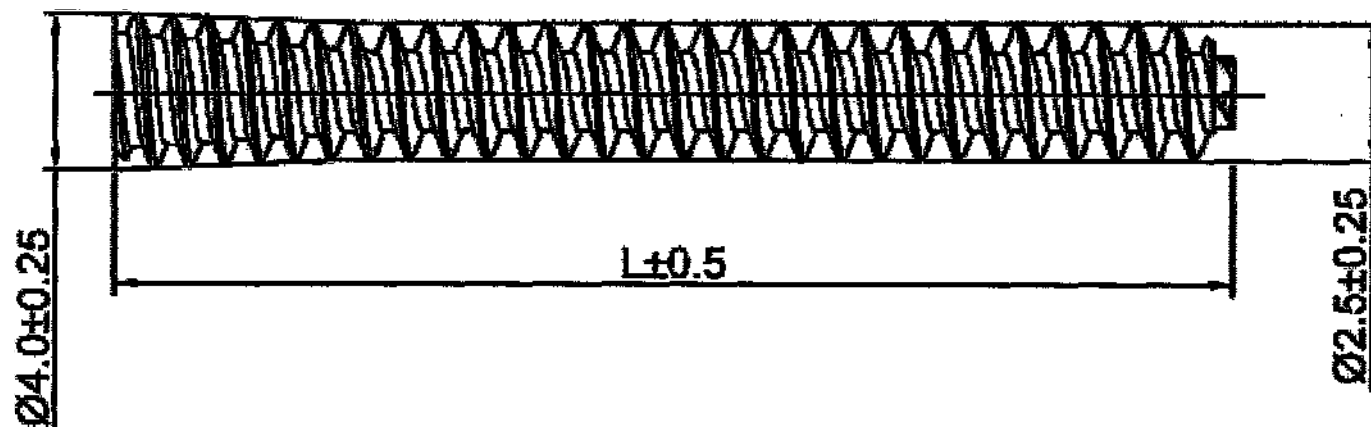

Макс. диаметр, мм	Мин. диаметр, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter, mm	Min Diameter, mm	Roughness, μm , not more
$4,0 \pm 0,25$	$2,5 \pm 0,25$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± g / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 10 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 10 мм	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 12 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 12 мм	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 14 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 14 мм	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 16 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 16 мм	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 18 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 18 мм	18	T=0.12±20% S=0.22±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 20 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 20 мм	20	T=0.13±20% S=0.24±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 22 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 22 мм	22	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 24 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 24 мм	24	T=0.15±20% S=0.27±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 26 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 26 мм	26	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 28 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 28 мм	28	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – MINI, length: 30 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 30 мм	30	T=0.2±20% S=0.36±20%

Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм / Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 10 -30 mm increments 2 mm

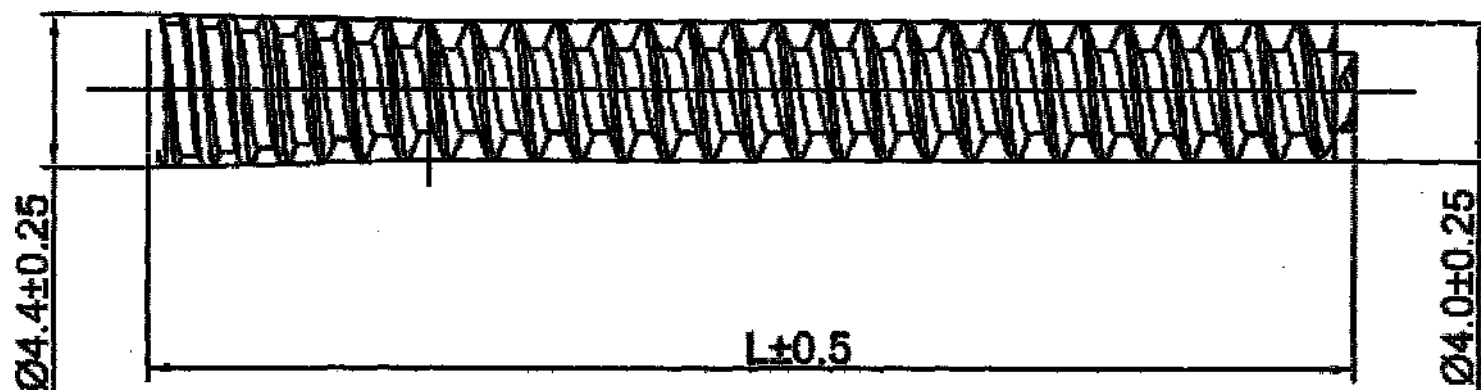


Макс. диаметр с погрешностями, мм	Мин. диаметр с погрешностями, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter, mm	Min Diameter, mm	Roughness, μm , not more
$4,4 \pm 0,25$	$4,0 \pm 0,25$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 10 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 10 мм	10	T=0.07±20% S=0.13±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 12 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 12 мм	12	T=0.08±20% S=0.15±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 14 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 14 мм	14	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 16 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 16 мм	16	T=0.11±20% S=0.20±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 18 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 18 мм	18	T=0.12±20% S=0.22±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 20 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 20 мм	20	T=0.13±20% S=0.24±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 22 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 22 мм	22	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 24 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 24 мм	24	T=0.15±20% S=0.27±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 26 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 26 мм	26	T=0.17±20% S=0.31±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 28 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 28 мм	28	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Compression HBQ 06 Headless – STANDARD, length: 30 mm	Винт сжимающий HBQ 06 без головки- стандартный, длина: 30 мм	30	T=0.2±20% S=0.36±20%

Винт конический каниюлированный / Screw Conical Cannulated

Винт конический каниюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 30-145 мм с шагом 5 мм / Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 30 -145 mm increments 5 mm

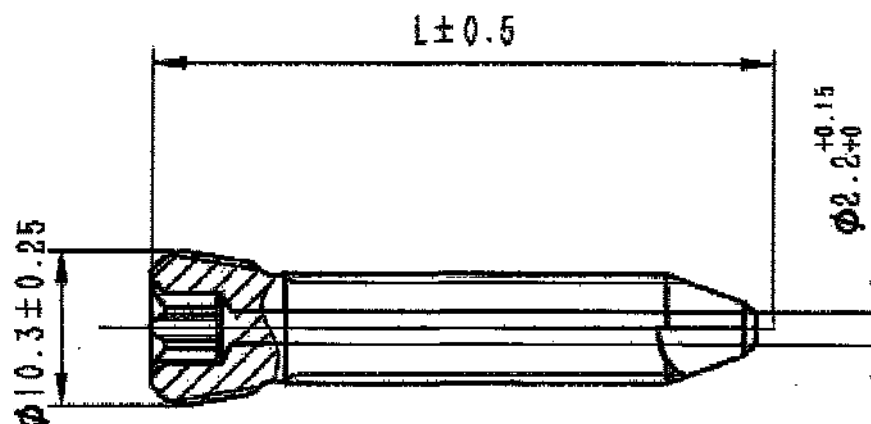

Диаметр отверстия, мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter of hole, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$2,2^{+0,15}_{+0}$	$10,3 \pm 0,25$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 30 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 30 мм	30	T=4.0±20% S=7.2±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 35 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 35 мм	35	T=4.7±20% S=8.45±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 40 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 40 мм	40	T=5.4±20% S=9.7±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 45 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 45 мм	45	T=6.3±20% S=11.3±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 50 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 50 мм	50	T=6.97±20% S=12.53±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 55 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 55 мм	55	T=7.66±20% S=13.79±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 60 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 60 мм	60	T=8.36±20% S=15.04±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 65 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 65 мм	65	T=9.06±20% S=16.3±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 70 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 70 мм	70	T=9.75±20% S=17.55±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 75 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 75 мм	75	T=10.45±20% S=18.8±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 80 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 80 мм	80	T=11.15±20% S=20.6±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 85 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 85 мм	85	T=11.84±20% S=21.31±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 90 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 90 мм	90	T=12.54±20% S=22.56±20%

Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 95 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 95 мм	95	T=13.24±20% S=23.82±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 100 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 100 мм	100	T=13.93±20% S=25.1±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 105 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 105 мм	105	T=14.6±20% S=26.3±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 110 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 110 мм	110	T=15.3±20% S=27.6±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 115 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 115 мм	115	T=16.0±20% S=28.8±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 120 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 120 мм	120	T=16.72±20% S=30.1±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 125 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 125 мм	125	T=17.4±20% S=31.3±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 130 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 130 мм	130	T=18.1±20% S=32.6±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 135 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 135 мм	135	T=18.8±20% S=33.84±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 140 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 140 мм	140	T=19.5±20% S=35.1±20%
Screw Conical Cannulated HAQ02, 7.3 mm length: 145 mm	Винт конический канюлированный HAQ02, 7.3 мм длина: 145 мм	145	T=20.2±20% S=36.3±20%

Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 30-145 мм с шагом 5 мм / Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 30 -145 mm increments 5 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$7,3^{0}_{-0,15}$	$4^{+0,25}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 30 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 30 мм	30	T=2.3±20% S=4.15±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 35 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 35 мм	35	T=2.7±20% S=4.85±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 40 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 40 мм	40	T=3.0±20% S=5.4±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 45 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 45 мм	45	T=3.4±20% S=6.1±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 50 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 50 мм	50	T=3.75±20% S=6.75±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 55 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 55 мм	55	T=4.1±20% S=7.4±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 60 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 60 мм	60	T=4.45±20% S=8±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 65 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 65 мм	65	T=4.8±20% S=8.65±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 70 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 70 мм	70	T=5.2±20% S=9.35±20%

Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 75 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 75 мм	75	T=5.55±20% S=10±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 80 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 80 мм	80	T=5.9±20% S=10.6±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 85 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 85 мм	85	T=6.3±20% S=11.3±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 90 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 90 мм	90	T=6.6±20% S=11.9±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 95 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 95 мм	95	T=7±20% S=12.6±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 100 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 100 мм	100	T=7.35±20% S=13.2±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 105 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 105 мм	105	T=7.7±20% S=13.85±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 110 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 110 мм	110	T=8.05±20% S=14.48±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 115 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 115 мм	115	T=8.4±20% S=15.1±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 120 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 120 мм	120	T=8.8±20% S=15.85±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 125 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 125 мм	125	T=9.15±20% S=16.5±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 130 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 130 мм	130	T=9.5±20% S=17.1±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 135 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 135 мм	135	T=9.85±20% S=17.8±20%
Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 140 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 140 мм	140	T=10.2±20% S=18.35±20%

Screw Conical Cannulated with Partial Thread HAQ02, 7.3 mm length: 145 mm	Винт конический канюлированный с неполной резьбой HAQ02, 7.3 мм, длина: 145 мм	145	T=10.6±20% S=19.1±20%
--	---	-----	--------------------------

Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 25-145 мм с шагом 5 мм / Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 25 -145 mm increments 5 mm


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
$5_{-0,15}^0$	$4,5_{-0}^{+0,25}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 25 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 25 мм	25	T=1.85±20% S=3.23±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 30 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 30 мм	30	T=2.22±20% S=3.88±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 35 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 35 мм	35	T=2.59±20% S=4.52±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 40 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 40 мм	40	T=2.96±20% S=5.17±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 45 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 45 мм	45	T=3.33±20% S=5.82±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 50 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 50 мм	50	T=3.7±20% S=6.47±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 55 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 55 мм	55	T=4.08±20% S=7.11±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 60 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 60 мм	60	T=4.45±20% S=7.76±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 65 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 65 мм	65	T=4.82±20% S=8.41±20%

Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 70 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 70 мм	70	T=5.1±20% S=9.05±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 75 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 75 мм	75	T=5.56±20% S=9.7±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 80 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 80 мм	80	T=5.93±20% S=10.3±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 85 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 85 мм	85	T=6.3±20% S=10.9±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 90 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 90 мм	90	T=6.67±20% S=11.64±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 95 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 95 мм	95	T=7.04±20% S=12.29±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 100 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 100 мм	100	T=7.41±20% S=12.94±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 105 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 105 мм	105	T=7.78±20% S=13.58±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 110 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 110 мм	110	T=8.16±20% S=14.23±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 115 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 115 мм	115	T=8.53±20% S=14.88±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 120 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 120 мм	120	T=8.9±20% S=15.52±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 125 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 125 мм	125	T=9.27±20% S=16.17±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 130 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 130 мм	130	T=9.64±20% S=16.82±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 135 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 135 мм	135	T=10.01±20% S=17.46±20%

Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 140 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 140 мм	140	T=10.38±20% S=18.11±20%
Screw Conical Cannulated Locking HAQ02, 5.0 mm length: 145 mm	Винт конический канюлированный фиксирующий HAQ02, 5,0 мм, длина: 145 мм	145	T=10.75±20% S=18.76±20%

Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 50-120 мм с шагом 5 мм / Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 50 -120 mm increments 5 mm

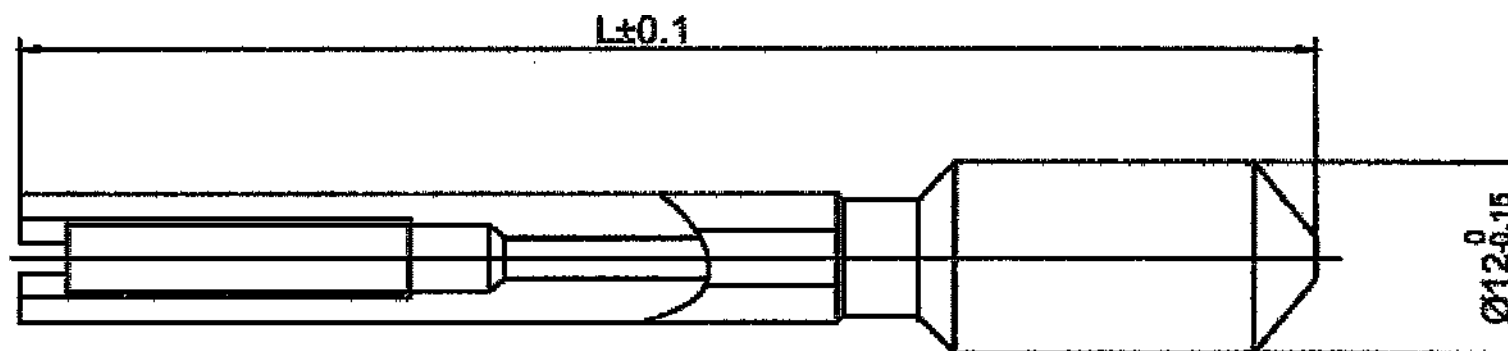

Диаметр резьбы с погрешностью, мм ± мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter thread with tolerances mm± mm	Roughness, µm, not more
$12^{0}_{-0.15}$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	Л. ±0.1, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 50 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 50 мм	50	T=24.02±20% S=41.9±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 55 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 55 мм	55	T=25.15±20% S=43.87±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 60 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 60 мм	60	T=26.28±20% S=45.84±20%

Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 65 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 65 мм	65	T=27.41±20% S=47.81±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 70 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 70 мм	70	T=28.54±20% S=49.79±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 75 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 75 мм	75	T=29.67±20% S=51.76±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 80 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 80 мм	80	T=30.08±20% S=53.73±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 85 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 85 мм	85	T=31.93±20% S=55.7±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 90 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 90 мм	90	T=33.06±20% S=57.67±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 95 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 95 мм	95	T=34.19±20% S=59.65±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 100 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 100 мм	100	T=35.32±20% S=61.62±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 105 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 105 мм	105	T=36.45±20% S=63.59±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 110 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 110 мм	110	T=37.58±20% S=65.56±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 115 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 115 мм	115	T=38.71±20% S=67.53±20%
Screw Dynamic Hip HBQ03, 12.0 mm length: 120 mm	Винт динамический для шейки бедра, HBQ03, 12,0 мм, длина: 120 мм	120	T=39.84±20% S=69.51±20%

Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 25-75 мм с шагом 5 мм / Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 25 -75 mm increments 5 mm


Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$4,5^{+0}_{-0,15}$	$3,5^{+0,25}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 25 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 25 мм	25	T=1.4±20% S=2.5±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 30 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 30 мм	30	T=1.5±20% S=2.7±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 35 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 35 мм	35	T=1.6±20% S=2.9±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 40 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 40 мм	40	T=1.7±20% S=3.1±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 45 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 45 мм	45	T=1.8±20% S=3.2±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 50 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 50 мм	50	T=1.9±20% S=3.4±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 55 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 55 мм	55	T=2.0±20% S=3.6±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 60 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 60 мм	60	T=2.1±20% S=3.8±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 65 mm	Винт маллеоларный, HAQ03 4,5 мм длина: 65 мм	65	T=2.2±20% S=3.95±20%

Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 70 mm	Винт маллеолярный, HAQ03 4,5 мм длина: 70 мм	70	T=2.3±20% S=4.15±20%
Screw Malleolar HAQ03 4.5 mm, length: 75 mm	Винт маллеолярный, HAQ03 4,5 мм длина: 75 мм	75	T=2.4±20% S=4.3±20%

Винт канюлированный / Screw Cannulated


Винт канюлированный НАQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated НАQ02, 2.0 mm, short thread, length: 10 -30 mm increments 2 mm

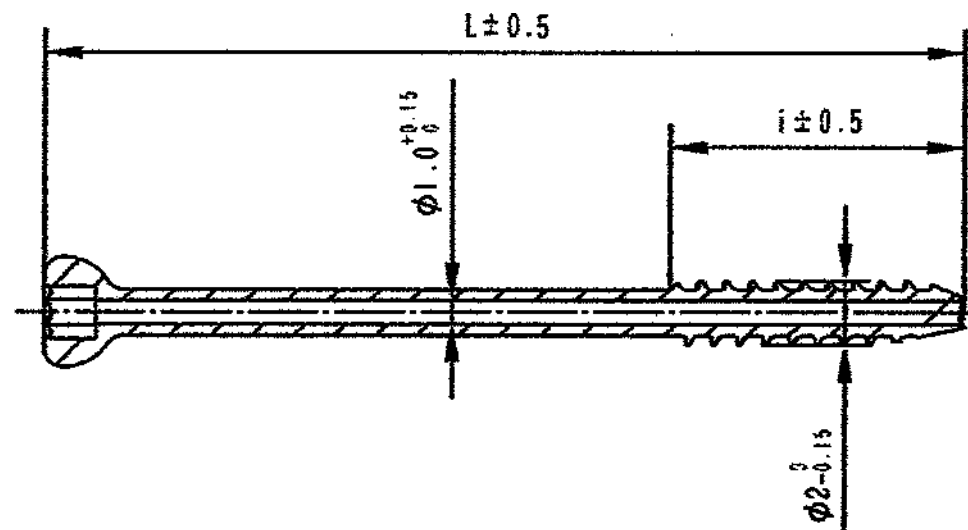

Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$2^{+0}_{-0.15}$	$1^{+0.15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$\pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $г \pm г$ / Mass with tolerances, g $\pm g$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10 мм	10	6	$T=0.07 \pm 20\%$ $S=0.13 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 12 мм	12	6	$T=0.08 \pm 20\%$ $S=0.15 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 14 мм	14	6	$T=0.1 \pm 20\%$ $S=0.18 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	6	$T=0.11 \pm 20\%$ $S=0.20 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	6	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	6	$T=0.13 \pm 20\%$ $S=0.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	6	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	6	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.27 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	8	$T=0.17 \pm 20\%$ $S=0.31 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	8	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	8	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$


Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 10 -30 mm increments 2 mm

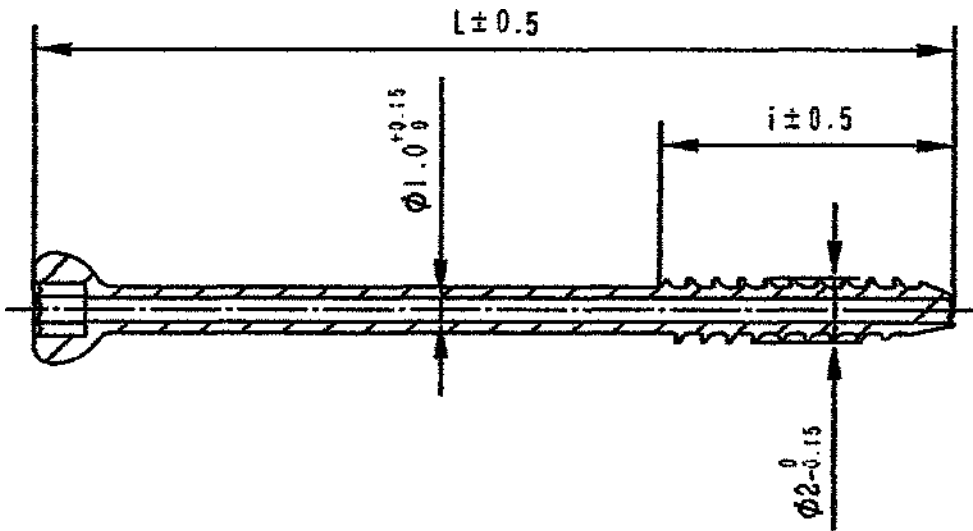

Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$2^{+0.15}_0$	$1^{+0.15}_0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$\pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 10 мм	10	7	$T=0.07 \pm 20\%$ $S=0.13 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 12 мм	12	7	$T=0.08 \pm 20\%$ $S=0.15 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 14 мм	14	10	$T=0.1 \pm 20\%$ $S=0.18 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	10	$T=0.11 \pm 20\%$ $S=0.20 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	10	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	10	$T=0.13 \pm 20\%$ $S=0.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	10	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	10	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.27 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	10	$T=0.17 \pm 20\%$ $S=0.31 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	10	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HAQ02, 2.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HAQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	10	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$


Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 18-30 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 18 -30 mm increments 2 mm

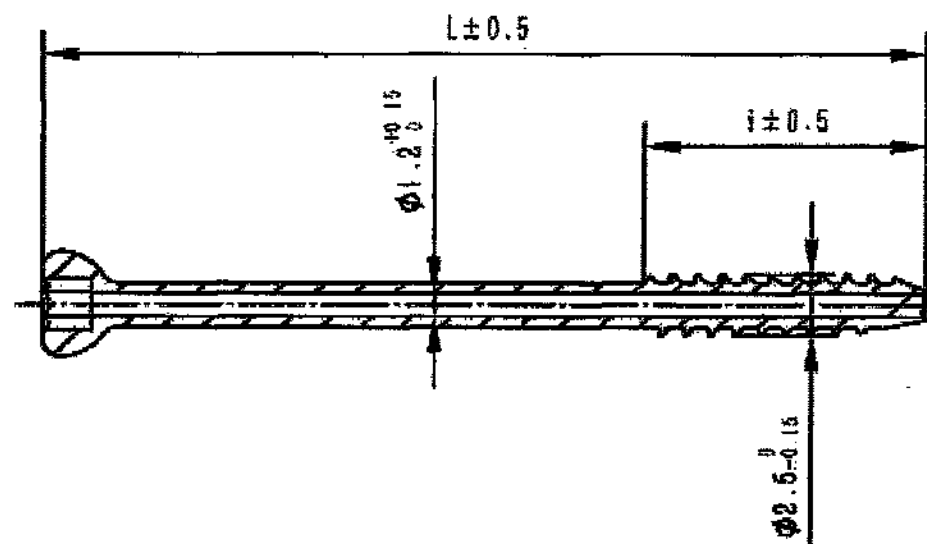

Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
2,5 ⁰ _{-0,15}	1,2 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$d \pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $m \pm g$ / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	6	$T=0.16 \pm 20\%$ $S=0.28 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	6	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	6	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.35 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	6	$T=0.21 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	8	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.41 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	8	$T=0.25 \pm 20\%$ $S=0.44 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	8	$T=0.27 \pm 20\%$ $S=0.48 \pm 20\%$


Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 10-30 mm increments 2 mm

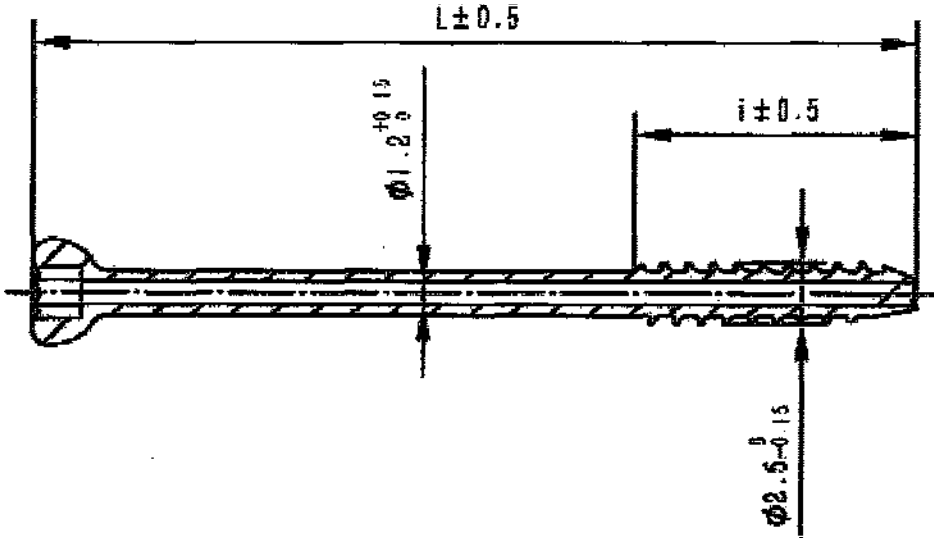

Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
2,5 ⁰ _{-0,15}	1,2 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$L \pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $g \pm g$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 10 мм	10	7	$T=0.1 \pm 20\%$ $S=0.18 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 12 мм	12	7	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 14 мм	14	10	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	10	$T=0.16 \pm 20\%$ $S=0.29 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	10	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	10	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	10	$T=0.22 \pm 20\%$ $S=0.40 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	10	$T=0.24 \pm 20\%$ $S=0.43 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	10	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.47 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	10	$T=0.28 \pm 20\%$ $S=0.51 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 2.5 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	10	$T=0.3 \pm 20\%$ $S=0.54 \pm 20\%$

Винт канюлированный НВQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm

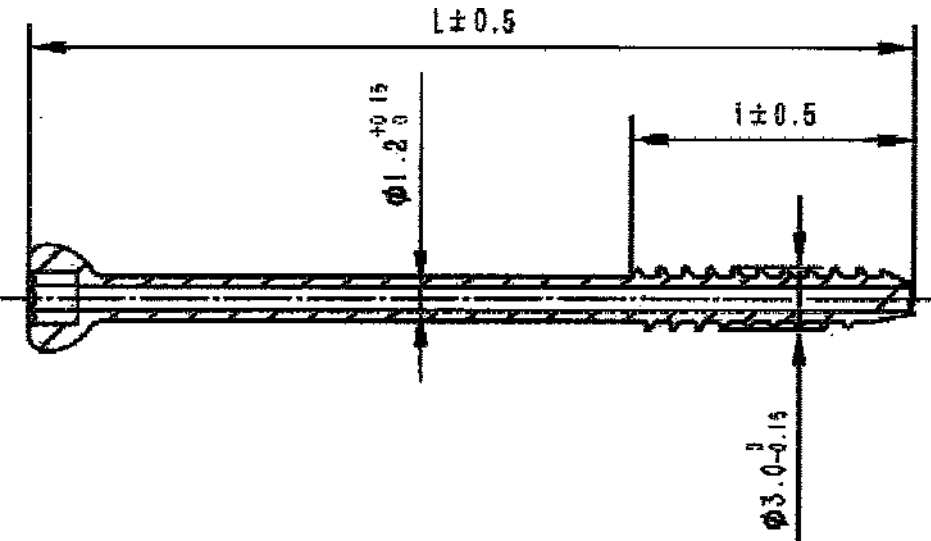


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
3 ⁰ _{-0,15}	1,2 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5 \text{ mm (mm)}$	$H \pm 0.5 \text{ mm (mm)}$	Масса с погрешностями, $T \pm T / S \pm S$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10 мм	10	4	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.26 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 12 мм	12	4	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 14 мм	14	4	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	4	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.41 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	4	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.46 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	4	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.52 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	5	$T=0.32 \pm 20\%$ $S=0.57 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	5	$T=0.35 \pm 20\%$ $S=0.62 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	5	$T=0.38 \pm 20\%$ $S=0.68 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	5	$T=0.41 \pm 20\%$ $S=0.73 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	5	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	5	$T=0.47 \pm 20\%$ $S=0.84 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	5	$T=0.5 \pm 20\%$ $S=0.89 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	5	T=0.53±20% S=0.95±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	5	T=0.56±20% S=1.0±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	5	T=0.58±20% S=1.04±20%

Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 14-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 14 -40 mm increments 2 mm

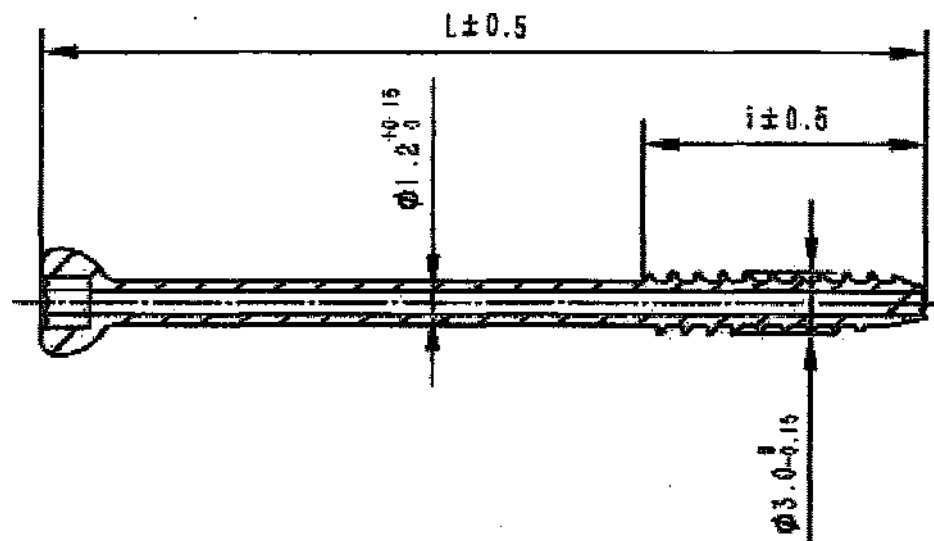


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$3^{+0}_{-0.15}$	$1.2^{+0.15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$L \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 14 мм	14	7	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	7	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.41 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	7	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.46 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	7	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.52 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	7	$T=0.32 \pm 20\%$ $S=0.57 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	7	$T=0.35 \pm 20\%$ $S=0.62 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	7	$T=0.38 \pm 20\%$ $S=0.68 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	7	$T=0.41 \pm 20\%$ $S=0.73 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	10	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	10	$T=0.47 \pm 20\%$ $S=0.84 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	10	$T=0.5 \pm 20\%$ $S=0.89 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	10	$T=0.53 \pm 20\%$ $S=0.95 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	10	$T=0.56 \pm 20\%$ $S=1.0 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 3.0 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	10	T=0.58±20% S=1.04±20%
--	---	----	----	--------------------------

Винт канюлированный НВQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm

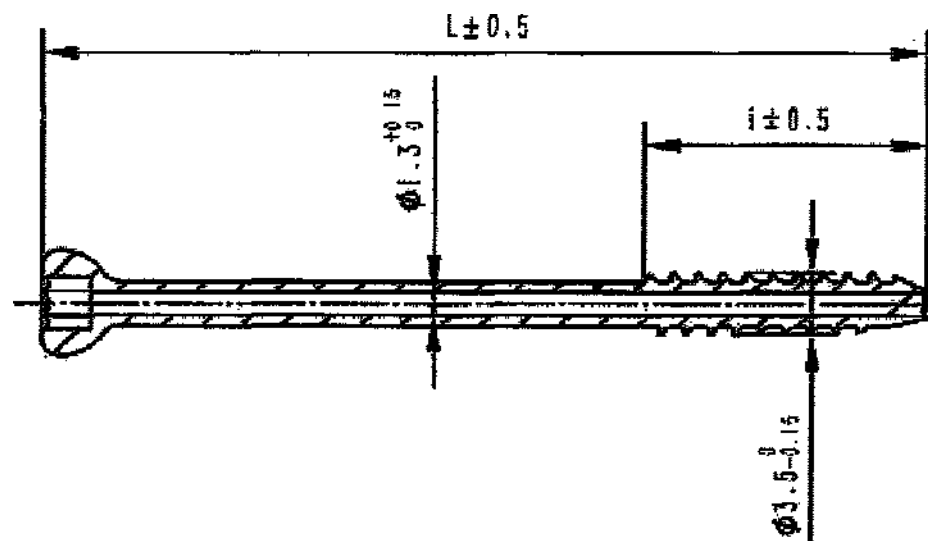


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$3.5^{+0}_{-0.15}$	$1.3^{+0.15}_{-0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$ mm (mm)	$L \pm 0.5$ mm (mm)	Масса с погрешностями, $m \pm T$ / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 10 мм	10	4	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 12 мм	12	4	$T=0.22 \pm 20\%$ $S=0.39 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 14 мм	14	4	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.46 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	4	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.52 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	4	$T=0.33 \pm 20\%$ $S=0.59 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	4	$T=0.37 \pm 20\%$ $S=0.66 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	5	$T=0.4 \pm 20\%$ $S=0.72 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	5	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	5	$T=0.48 \pm 20\%$ $S=0.86 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	5	$T=0.52 \pm 20\%$ $S=0.93 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	5	$T=0.55 \pm 20\%$ $S=0.98 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	5	$T=0.59 \pm 20\%$ $S=1.06 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	5	$T=0.63 \pm 20\%$ $S=1.33 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	5	T=0.66±20% S=1.18±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	5	T=0.7±20% S=1.25±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	5	T=0.74±20% S=1.33±20%

Винт канюлированный НВQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм, 35 мм, 45 мм, 50 мм / Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm

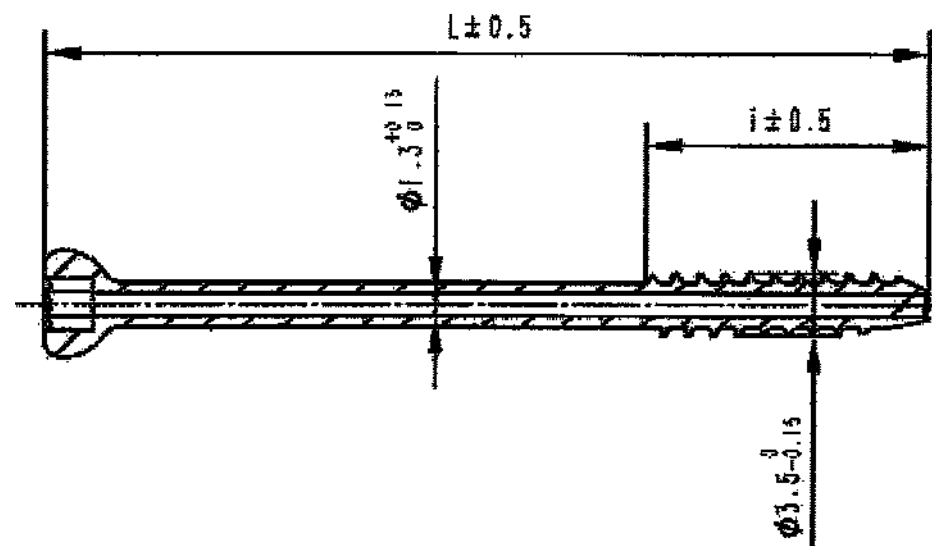


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
$3.5^{+0}_{-0.15}$	$1.3^{+0.15}_{-0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$ mm (mm)	$r \pm 0,5$ mm (mm)	Масса с догрешностями, $r \pm r /$ Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 10 мм	10	7	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 12 мм	12	7	$T=0.22 \pm 20\%$ $S=0.39 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 14 мм	14	7	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.46 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	7	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.52 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	7	$T=0.33 \pm 20\%$ $S=0.59 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	7	$T=0.37 \pm 20\%$ $S=0.66 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	7	$T=0.4 \pm 20\%$ $S=0.72 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	7	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	7	$T=0.48 \pm 20\%$ $S=0.86 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	7	$T=0.52 \pm 20\%$ $S=0.93 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	10	$T=0.55 \pm 20\%$ $S=0.98 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	10	$T=0.59 \pm 20\%$ $S=1.06 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	10	$T=0.63 \pm 20\%$ $S=1.13 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 35 мм	35	10	T=0.65±20% S=1.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	10	T=0.66±20% S=1.18±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	10	T=0.7±20% S=1.25±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	10	T=0.74±20% S=1.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 45 мм	45	10	T=0.83±20% S=1.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	10	T=0.93±20% S=1.67±20%

Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм, 35 мм, 45 мм, 50 мм / Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 10 -40 mm increments 2 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm

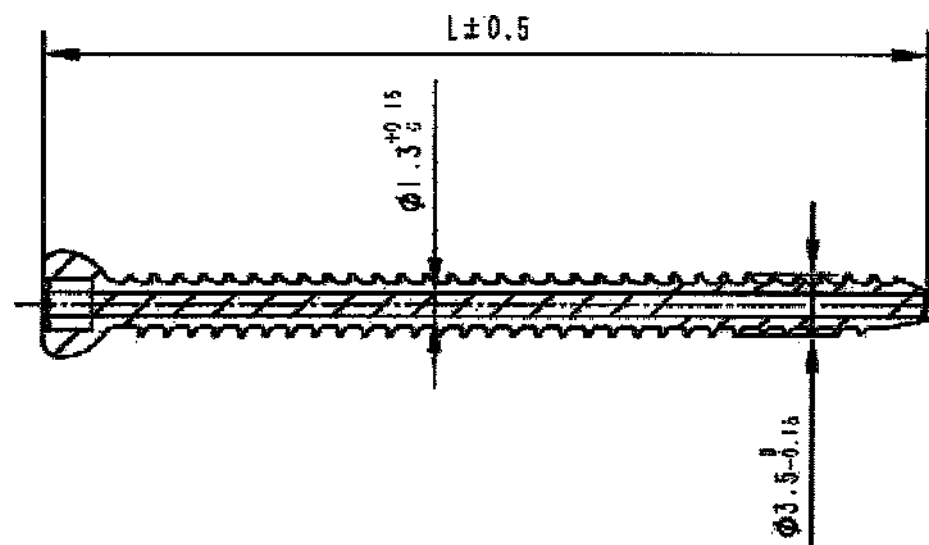


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
3,5 ⁰ _{-0,15}	1,3 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 10 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 10 мм	10	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 12 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 12 мм	12	T=0.22±20% S=0.39±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 14 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 14 мм	14	T=0.26±20% S=0.46±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 16 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 16 мм	16	T=0.29±20% S=0.52±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 18 мм	18	T=0.33±20% S=0.59±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 20 мм	20	T=0.37±20% S=0.66±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 22 мм	22	T=0.4±20% S=0.72±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 24 мм	24	T=0.44±20% S=0.79±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 26 мм	26	T=0.48±20% S=0.86±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 28 мм	28	T=0.52±20% S=0.93±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 30 мм	30	T=0.55±20% S=0.98±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 32 мм	32	T=0.59±20% S=1.06±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 34 мм	34	T=0.63±20% S=1.13±20%

Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 35 мм	35	T=0.65±20% S=1.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 36 мм	36	T=0.66±20% S=1.18±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 38 мм	38	T=0.7±20% S=1.25±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 40 мм	40	T=0.74±20% S=1.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 45 мм	45	T=0.83±20% S=1.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 3.5 mm, fully thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 50 мм	50	T=0.93±20% S=1.67±20%

Винт канюлированный НВQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 18-50 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 18 -50 mm increments 2 mm

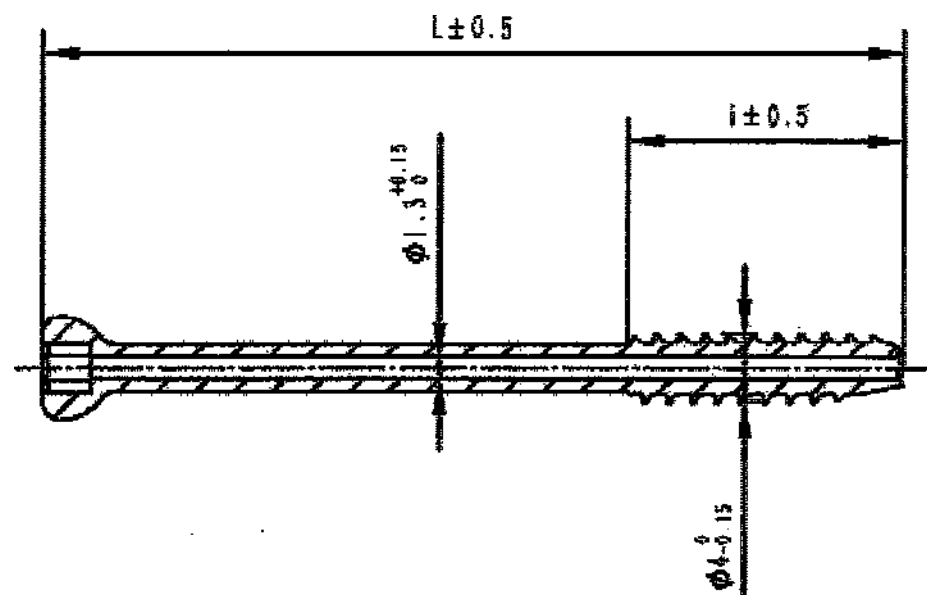


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
$4^{+0}_{-0.15}$	$1.3^{+0.15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, mm (mm)	$L \pm 0.5$, mm (mm)	Масса с погрешностями, $m \pm g$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	16	$T=0.51 \pm 20\%$ $S=0.91 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	16	$T=0.57 \pm 20\%$ $S=1.02 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	16	$T=0.62 \pm 20\%$ $S=1.12 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	16	$T=0.68 \pm 20\%$ $S=1.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	16	$T=0.73 \pm 20\%$ $S=1.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	16	$T=0.79 \pm 20\%$ $S=1.42 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	16	$T=0.85 \pm 20\%$ $S=1.52 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	16	$T=0.9 \pm 20\%$ $S=1.63 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	16	$T=0.96 \pm 20\%$ $S=1.73 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	16	$T=1.02 \pm 20\%$ $S=1.83 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	16	$T=1.07 \pm 20\%$ $S=1.93 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	16	$T=1.13 \pm 20\%$ $S=2.03 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 42 мм	42	16	$T=1.19 \pm 20\%$ $S=2.13 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 44 мм	44	16	T=1.24±20% S=2.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 46 мм	46	16	T=1.3±20% S=2.34±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 48 мм	48	16	T=1.36±20% S=2.44±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	16	T=1.41±20% S=2.54±20%

Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 18-50 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 18 -50 mm increments 2 mm

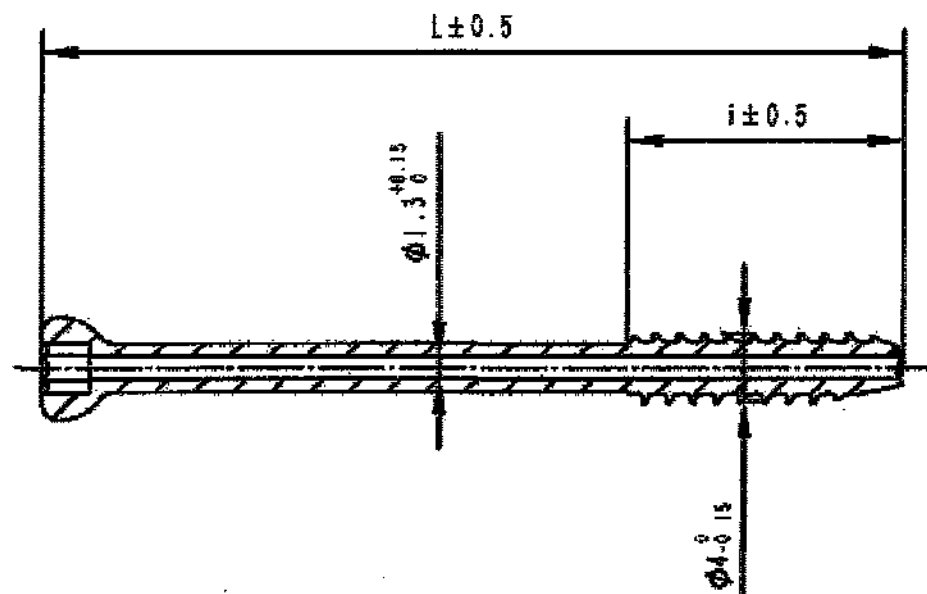


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
$4^{+0}_{-0.15}$	$1.3^{+0.15}_0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5, мм (mm)	l ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	16	T=0.51±20% S=0.91±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	18	T=0.57±20% S=1.02±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	20	T=0.62±20% S=1.12±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	22	T=0.68±20% S=1.22±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	24	T=0.73±20% S=1.32±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	26	T=0.79±20% S=1.42±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	28	T=0.85±20% S=1.52±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	30	T=0.9±20% S=1.63±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	32	T=0.96±20% S=1.73±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	32	T=1.02±20% S=1.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	32	T=1.07±20% S=1.93±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	32	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 42 мм	42	32	T=1.19±20% S=2.13±20%

Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 44 мм	44	32	T=1.24±20% S=2.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 46 мм	46	32	T=1.3±20% S=2.34±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 48 мм	48	32	T=1.36±20% S=2.44±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.0 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	T=1.41±20% S=2.54±20%

Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm

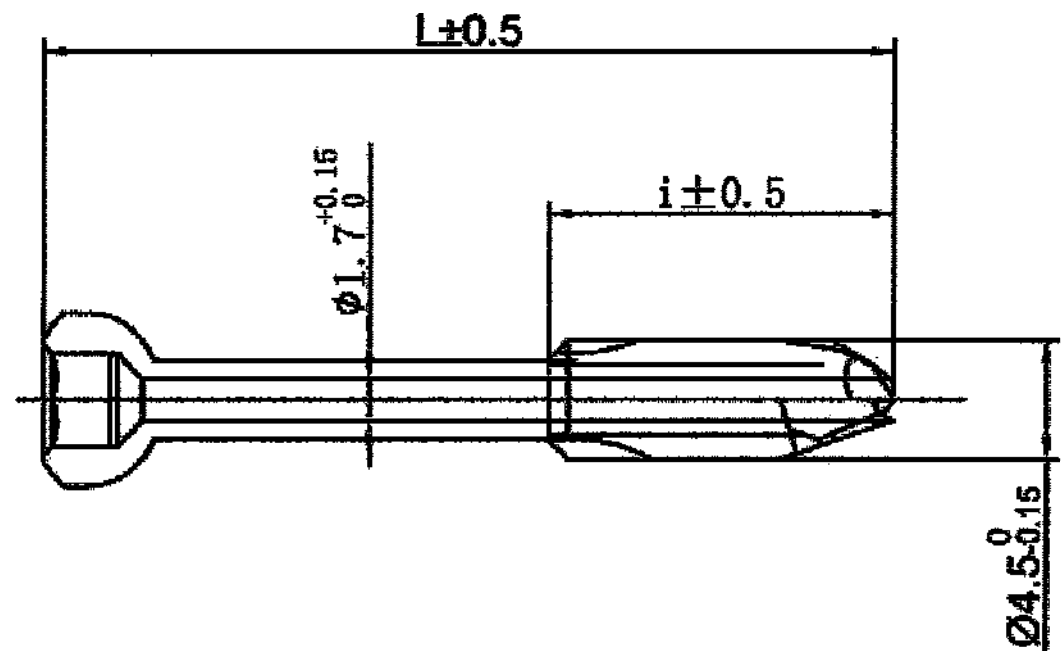


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
4,5 ⁰ _{-0,15}	1,7 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$L \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	16	$T=0.65 \pm 20\%$ $S=1.16 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	16	$T=0.69 \pm 20\%$ $S=1.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	16	$T=0.75 \pm 20\%$ $S=1.34 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	16	$T=0.81 \pm 20\%$ $S=1.45 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	16	$T=0.88 \pm 20\%$ $S=1.58 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	16	$T=0.94 \pm 20\%$ $S=1.69 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	16	$T=1 \pm 20\%$ $S=1.8 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	16	$T=1.06 \pm 20\%$ $S=1.9 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	16	$T=1.13 \pm 20\%$ $S=2.03 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	16	$T=1.19 \pm 20\%$ $S=2.14 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	16	$T=1.25 \pm 20\%$ $S=2.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 42 мм	42	16	$T=1.32 \pm 20\%$ $S=2.37 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 44 мм	44	16	T=1.38±20% S=2.48±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 46 мм	46	16	T=1.41±20% S=2.53±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 48 мм	48	16	T=1.44±20% S=2.59±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	16	T=1.5±20% S=2.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 52 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 52 мм	52	16	T=1.57±20% S=2.82±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 54 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 54 мм	54	16	T=1.63±20% S=2.93±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 56 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 56 мм	56	16	T=1.69±20% S=3.04±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 58 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 58 мм	58	16	T=1.72±20% S=3.09±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 60 мм	60	16	T=1.75±20% S=3.14±20%

Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm

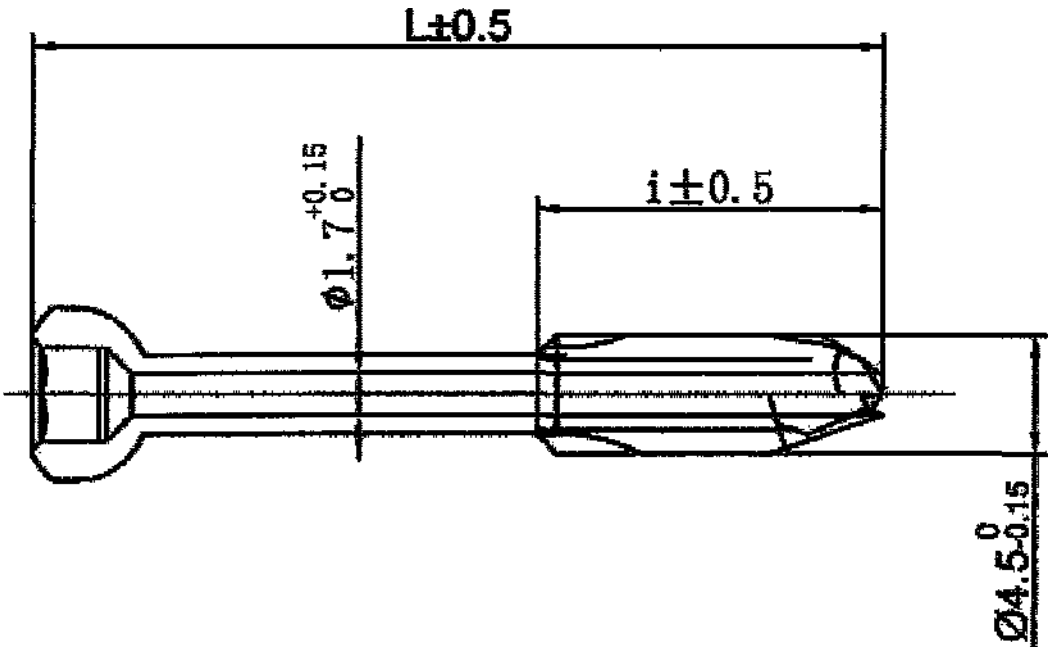


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$4.5^{+0}_{-0.15}$	$1.7^{+0.15}_0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	l ±0,5, мм (mm)	Масса погрешностями, g ± g / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	16	T=0.65±20% S=1.16±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	18	T=0.69±20% S=1.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	20	T=0.75±20% S=1.34±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	22	T=0.81±20% S=1.45±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	24	T=0.88±20% S=1.58±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	26	T=0.94±20% S=1.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	28	T=1±20% S=1.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	30	T=1.06±20% S=1.9±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	32	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	32	T=1.19±20% S=2.14±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	32	T=1.25±20% S=2.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 42 мм	42	32	T=1.32±20% S=2.37±20%

Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 44 мм	44	32	T=1.38±20% S=2.48±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 46 мм	46	32	T=1.41±20% S=2.53±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 48 мм	48	32	T=1.44±20% S=2.59±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	T=1.5±20% S=2.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 52 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 52 мм	52	32	T=1.57±20% S=2.82±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 54 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 54 мм	54	32	T=1.63±20% S=2.93±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 56 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 56 мм	56	32	T=1.69±20% S=3.04±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 58 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 58 мм	58	32	T=1.72±20% S=3.09±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 60 мм	60	32	T=1.75±20% S=3.14±20%

Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 20-60 mm increments 2 mm

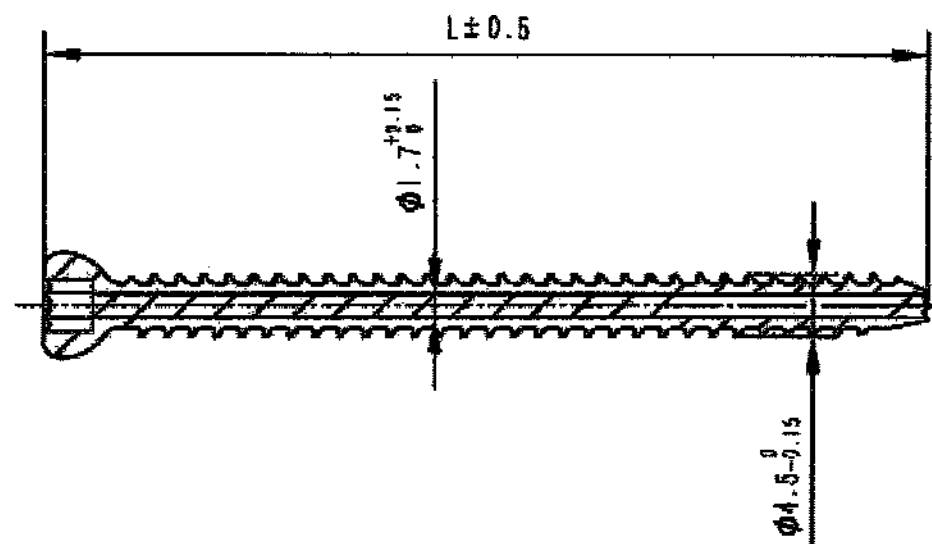


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
4,5 ⁰ _{-0.15}	1,7 ^{+0.15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±0.5, mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 20 мм	20	T=0.65±20% S=1.16±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 22 мм	22	T=0.69±20% S=1.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 24 мм	24	T=0.75±20% S=1.34±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 26 мм	26	T=0.81±20% S=1.45±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 28 мм	28	T=0.88±20% S=1.58±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 30 мм	30	T=0.94±20% S=1.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 32 мм	32	T=1±20% S=1.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 34 мм	34	T=1.06±20% S=1.9±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 36 мм	36	T=1.13±20% S=2.03±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 38 мм	38	T=1.19±20% S=2.14±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 40 мм	40	T=1.25±20% S=2.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 42 мм	42	T=1.32±20% S=2.37±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 44 мм	44	T=1.38±20% S=2.48±20%

Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 46 мм	46	T=1.41±20% S=2.53±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 48 мм	48	T=1.44±20% S=2.59±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 50 мм	50	T=1.5±20% S=2.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 52 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 52 мм	52	T=1.57±20% S=2.82±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 54 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 54 мм	54	T=1.63±20% S=2.93±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 56 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 56 мм	56	T=1.69±20% S=3.04±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 58 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 58 мм	58	T=1.72±20% S=3.09±20%
Screw Cannulated HBQ03, 4.5 mm, fully thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 60 мм	60	T=1.75±20% S=3.14±20%

Винт канюлированный НВQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм, 65 мм, 70 мм / Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 mm. 70 mm

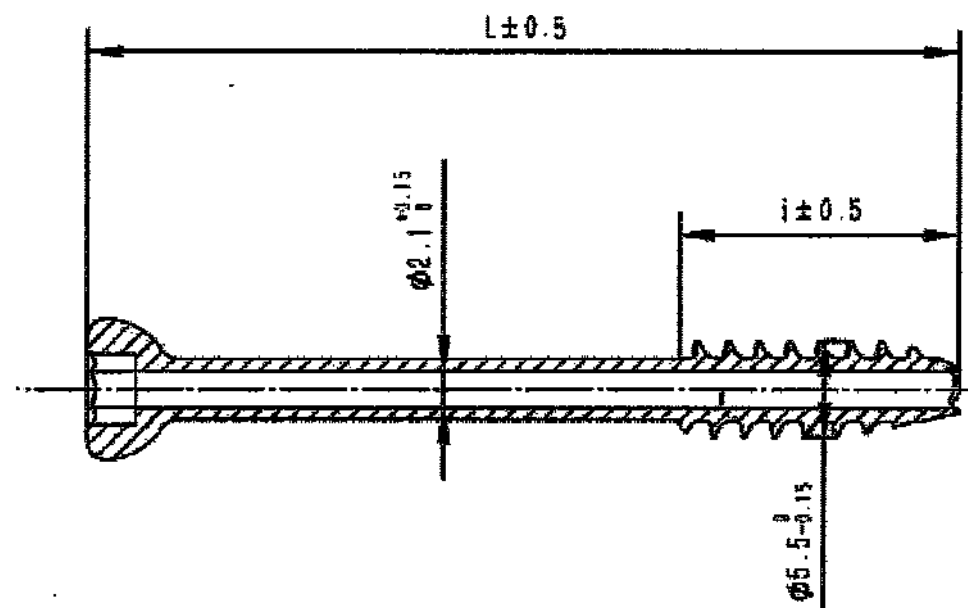


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
5,5 ⁰ _{-0,15}	2,1 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, mm (mm)	± 0.5 , mm (mm)	Масса с погрешностями, $g \pm g$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	16	$T=0.93 \pm 20\%$ $S=1.67 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	16	$T=1.02 \pm 20\%$ $S=1.83 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	16	$T=1.11 \pm 20\%$ $S=2 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	16	$T=1.2 \pm 20\%$ $S=2.17 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	16	$T=1.3 \pm 20\%$ $S=2.33 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	16	$T=1.39 \pm 20\%$ $S=2.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	16	$T=1.48 \pm 20\%$ $S=2.67 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	16	$T=1.58 \pm 20\%$ $S=2.83 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	16	$T=1.67 \pm 20\%$ $S=3.0 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	16	$T=1.76 \pm 20\%$ $S=3.17 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	16	$T=1.85 \pm 20\%$ $S=3.3 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 42 мм	42	16	$T=1.95 \pm 20\%$ $S=3.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 44 мм	44	16	$T=2.04 \pm 20\%$ $S=3.67 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 46 мм	46	16	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 48 мм	48	16	T=2.22±20% S=4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	16	T=2.32±20% S=4.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 52 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 52 мм	52	16	T=2.41±20% S=4.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 54 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 54 мм	54	16	T=2.5±20% S=4.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 56 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 56 мм	56	16	T=2.6±20% S=4.67±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 58 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 58 мм	58	16	T=2.69±20% S=4.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 60 мм	60	16	T=2.78±20% S=5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 65 мм	65	16	T=2.97±20% S=5.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, short thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 70 мм	70	16	T=3.24±20% S=5.83±20%

Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм, 65 мм, 70 мм / Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 mm. 70 mm

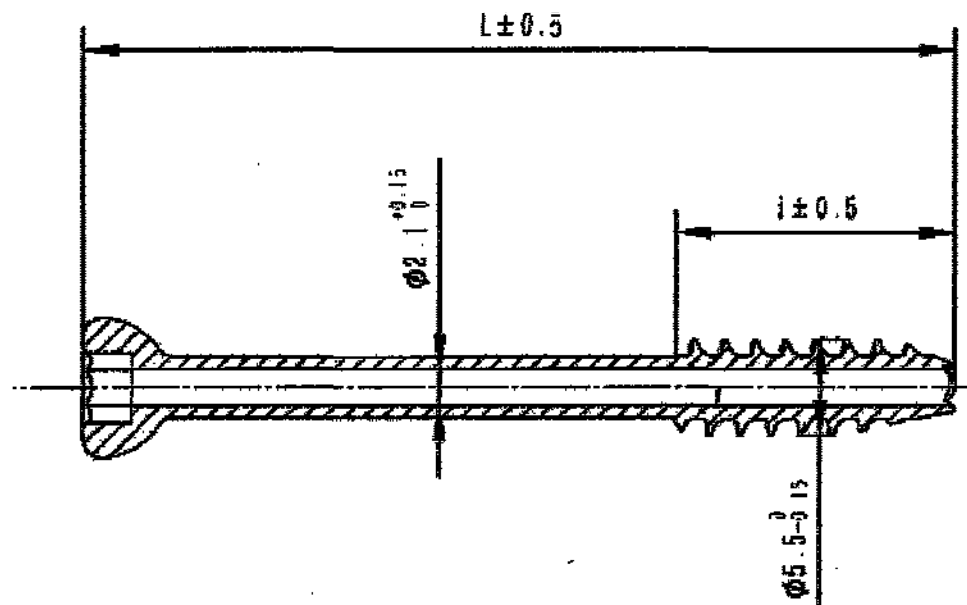


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
5,5 ⁰ _{-0,15}	2,1 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$ mm (mm)	$L \pm 0,5$ mm (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm T$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	16	$T=0.93 \pm 20\%$ $S=1.67 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	18	$T=1.02 \pm 20\%$ $S=1.83 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	20	$T=1.11 \pm 20\%$ $S=2 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	22	$T=1.2 \pm 20\%$ $S=2.17 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	24	$T=1.3 \pm 20\%$ $S=2.33 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	26	$T=1.39 \pm 20\%$ $S=2.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	28	$T=1.48 \pm 20\%$ $S=2.67 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	30	$T=1.58 \pm 20\%$ $S=2.83 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	32	$T=1.67 \pm 20\%$ $S=3.0 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	32	$T=1.76 \pm 20\%$ $S=3.17 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	32	$T=1.85 \pm 20\%$ $S=3.3 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 42 мм	42	32	$T=1.95 \pm 20\%$ $S=3.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 44 мм	44	32	$T=2.04 \pm 20\%$ $S=3.67 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 46 мм	46	32	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 48 мм	48	32	T=2.22±20% S=4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	T=2.32±20% S=4.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 52 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 52 мм	52	32	T=2.41±20% S=4.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 54 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 54 мм	54	32	T=2.5±20% S=4.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 56 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 56 мм	56	32	T=2.6±20% S=4.67±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 58 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 58 мм	58	32	T=2.69±20% S=4.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 60 мм	60	32	T=2.78±20% S=5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 65 мм	65	32	T=2.97±20% S=5.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, long thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 70 мм	70	32	T=3.24±20% S=5.83±20%

Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 65 мм, 70 мм / Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 65 mm. 70 mm

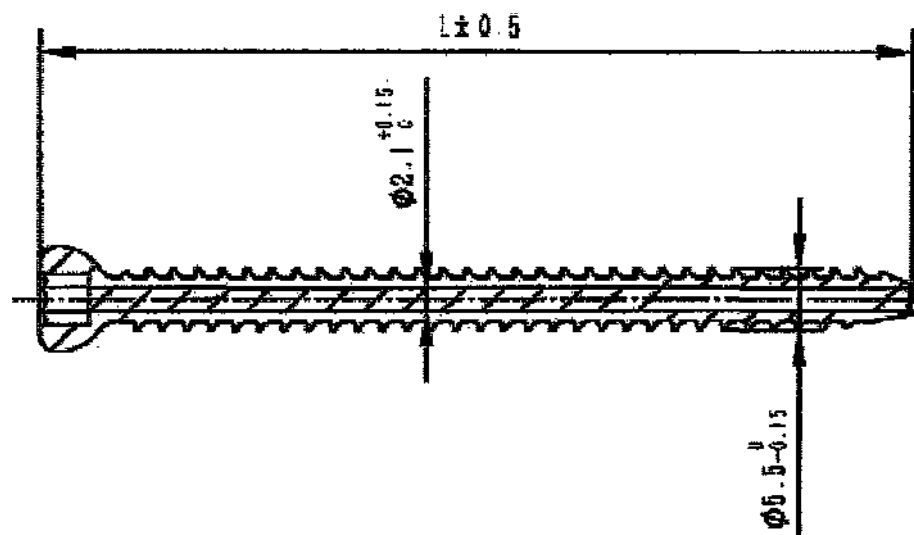


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
5,5 ⁰ _{-0,15}	2,1 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±0.5, mm(mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 20 мм	20	T=0.93±20% S=1.67±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 22 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 22 мм	22	T=1.02±20% S=1.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 24 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 24 мм	24	T=1.11±20% S=2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 26 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 26 мм	26	T=1.2±20% S=2.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 28 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 28 мм	28	T=1.3±20% S=2.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 30 мм	30	T=1.39±20% S=2.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 32 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 32 мм	32	T=1.48±20% S=2.67±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 34 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 34 мм	34	T=1.58±20% S=2.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 36 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 36 мм	36	T=1.67±20% S=3.0±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 38 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 38 мм	38	T=1.76±20% S=3.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 40 мм	40	T=1.85±20% S=3.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 42 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 42 мм	42	T=1.95±20% S=3.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 44 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 44 мм	44	T=2.04±20% S=3.67±20%

Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 46 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 46 мм	46	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 48 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 48 мм	48	T=2.22±20% S=4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 50 мм	50	T=2.32±20% S=4.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 52 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 52 мм	52	T=2.41±20% S=4.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 54 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 54 мм	54	T=2.5±20% S=4.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 56 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 56 мм	56	T=2.6±20% S=4.67±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 58 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 58 мм	58	T=2.69±20% S=4.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 60 мм	60	T=2.78±20% S=5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 65 мм	65	T=2.97±20% S=5.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 5.5 mm, fully thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 70 мм	70	T=3.24±20% S=5.83±20%

Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 20 -125 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 20 -125 mm increments 5 mm

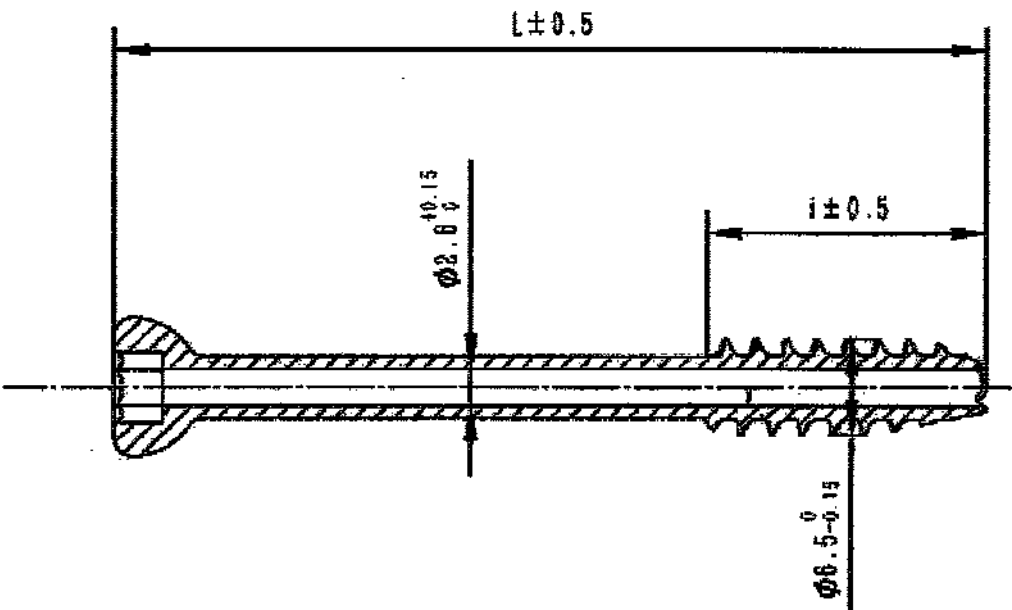


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
6,5 ⁰ _{-0,15}	2,6 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.5 mm (mm)	± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, g ± g / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	16	T=1.06±20% S=1.91±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 25 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 25 мм	25	16	T=1.33±20% S=2.39±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	16	T=1.59±20% S=2.87±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 35 мм	35	16	T=1.86±20% S=3.35±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	16	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 45 мм	45	16	T=2.39±20% S=4.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	16	T=2.66±20% S=4.78±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 55 мм	55	16	T=2.92±20% S=5.26±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 60 мм	60	16	T=3.19±20% S=5.74±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 65 мм	65	16	T=3.46±20% S=6.22±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 70 мм	70	16	T=3.72±20% S=6.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 75 мм	75	16	T=3.99±20% S=7.17±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 80 мм	80	16	T=4.25±20% S=7.65±20%

Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 85 мм	85	16	T=4.52±20% S=8.13±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 90 мм	90	16	T=4.78±20% S=8.61±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 95 мм	95	16	T=5.05±20% S=9.09±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 100 мм	100	16	T=5.32±20% S=9.56±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 105 мм	105	16	T=5.58±20% S=10.04±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 110 мм	110	16	T=5.85±20% S=10.52±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 115 мм	115	16	T=6.11±20% S=11±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 120 мм	120	16	T=6.38±20% S=11.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, short thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 125 мм	125	16	T=6.65±20% S=12±20%

Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 30 -125 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm

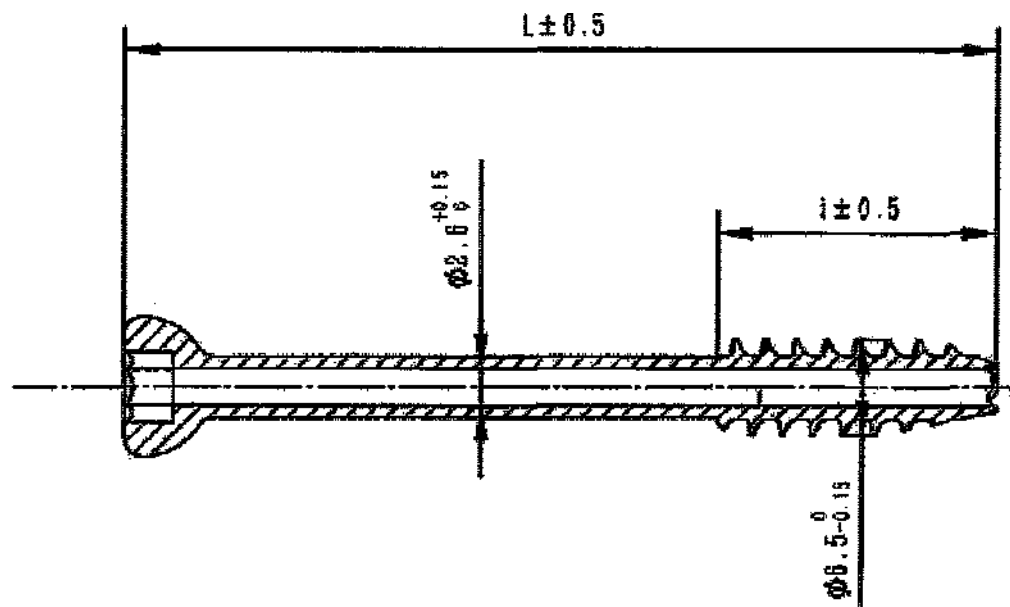


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
6,5 ⁰ _{-0,15}	2,6 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$r \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $r \pm r /$ Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	26	T=1.59 $\pm$ 20% S=2.87 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 35 мм	35	28	T=1.86 $\pm$ 20% S=3.35 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	30	T=2.13 $\pm$ 20% S=3.83 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 45 мм	45	32	T=2.39 $\pm$ 20% S=4.3 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	T=2.66 $\pm$ 20% S=4.78 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 55 мм	55	32	T=2.92 $\pm$ 20% S=5.26 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 60 мм	60	32	T=3.19 $\pm$ 20% S=5.74 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 65 мм	65	32	T=3.46 $\pm$ 20% S=6.22 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 70 мм	70	32	T=3.72 $\pm$ 20% S=6.69 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 75 мм	75	32	T=3.99 $\pm$ 20% S=7.17 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 80 мм	80	32	T=4.25 $\pm$ 20% S=7.65 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 85 мм	85	32	T=4.52 $\pm$ 20% S=8.13 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 90 мм	90	32	T=4.78 $\pm$ 20% S=8.61 $\pm$ 20%

Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 95 мм	95	32	T=5.05±20% S=9.09±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 100 мм	100	32	T=5.32±20% S=9.56±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 105 мм	105	32	T=5.58±20% S=10.04±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 110 мм	110	32	T=5.85±20% S=10.52±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 115 мм	115	32	T=6.11±20% S=11±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 120 мм	120	32	T=6.38±20% S=11.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 6.5 mm, long thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 125 мм	125	32	T=6.65±20% S=12±20%

Винт канюлированный НВQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm

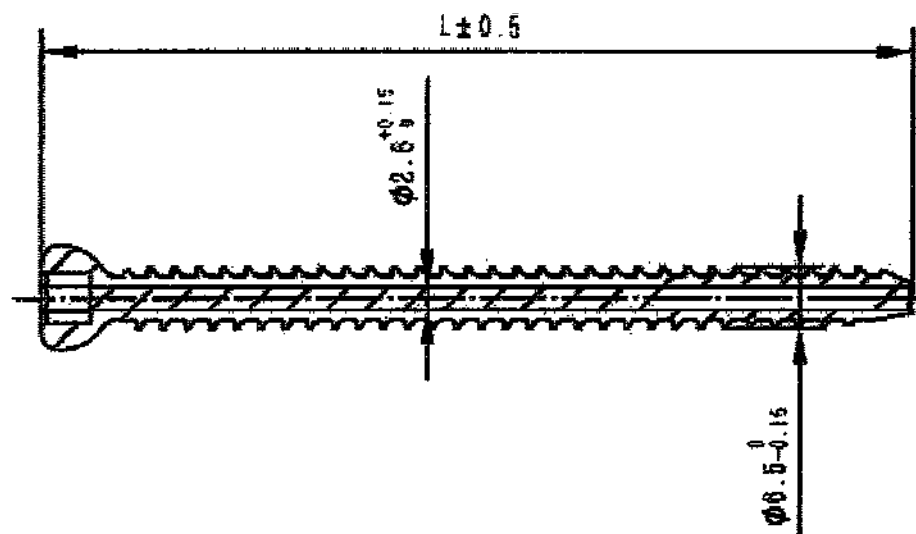


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
6,5 ⁰ _{-0,15}	2,6 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L=0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 30 мм	30	T=1.59±20% S=2.87±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 35 мм	35	T=1.86±20% S=3.35±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 40 мм	40	T=2.13±20% S=3.83±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 45 мм	45	T=2.39±20% S=4.3±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 50 мм	50	T=2.66±20% S=4.78±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 55 мм	55	T=2.92±20% S=5.26±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 60 мм	60	T=3.19±20% S=5.74±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 65 мм	65	T=3.46±20% S=6.22±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 70 мм	70	T=3.72±20% S=6.69±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 75 мм	75	T=3.99±20% S=7.17±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 80 мм	80	T=4.25±20% S=7.65±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 85 мм	85	T=4.52±20% S=8.13±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 90 мм	90	T=4.78±20% S=8.61±20%

Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 95 мм	95	T=5.05±20% S=9.09±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 100 мм	100	T=5.32±20% S=9.56±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 105 мм	105	T=5.58±20% S=10.04±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 110 мм	110	T=5.85±20% S=10.52±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 115 мм	115	T=6.11±20% S=11±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 120 мм	120	T=6.38±20% S=11.5±20%
Screw Cannulated HBQ02, 6.5 mm, fully thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 125 мм	125	T=6.65±20% S=12±20%

Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 30 -135 mm increments 5 mm

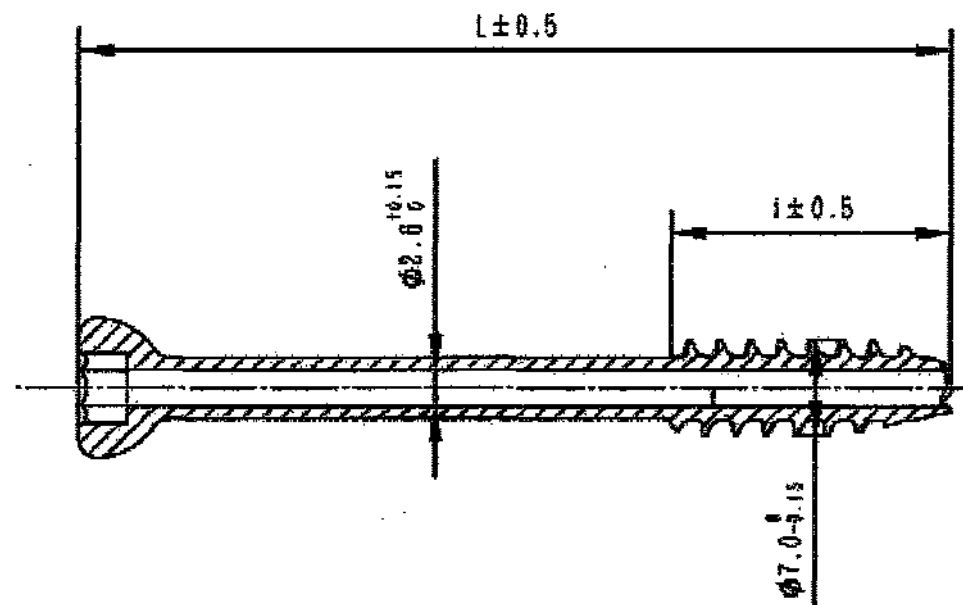


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
$7^{0}_{-0.15}$	$2,6^{+0.15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L $\pm$ 0.5, мм (mm)	T $\pm$ 0.5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г $\pm$ г / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	16	T=1.86 $\pm$ 20% S=3.35 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 35 мм	35	16	T=2.17 $\pm$ 20% S=3.91 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	16	T=2.48 $\pm$ 20% S=4.46 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 45 мм	45	16	T=2.79 $\pm$ 20% S=5.02 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	16	T=3.1 $\pm$ 20% S=5.58 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 55 мм	55	16	T=3.41 $\pm$ 20% S=6.14 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 60 мм	60	16	T=3.72 $\pm$ 20% S=6.69 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 65 мм	65	16	T=4.03 $\pm$ 20% S=7.25 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 70 мм	70	16	T=4.34 $\pm$ 20% S=7.8 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 75 мм	75	16	T=4.65 $\pm$ 20% S=8.37 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 80 мм	80	16	T=4.96 $\pm$ 20% S=8.93 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 85 мм	85	16	T=5.27 $\pm$ 20% S=9.5 $\pm$ 20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 90 мм	90	16	T=5.58 $\pm$ 20% S=10.4 $\pm$ 20%

Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 95 мм	95	16	T=5.89±20% S=10.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 100 мм	100	16	T=6.2±20% S=11.2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 105 мм	105	16	T=6.5±20% S=11.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 110 мм	110	16	T=6.8±20% S=12.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 115 мм	115	16	T=7.1±20% S=12.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 120 мм	120	16	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 125 мм	125	16	T=7.75±20% S=14±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 130 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 130 мм	130	16	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm short thread, length: 135 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 135 мм	135	16	T=8.4±20% S=15.1±20%

Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 30 -135 mm increments 5 mm

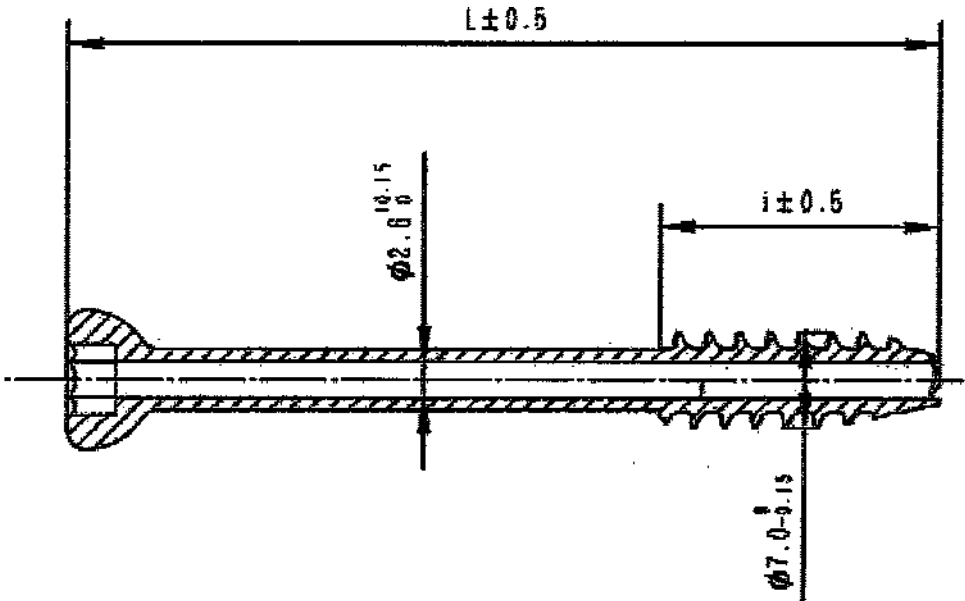


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
$7^{0}_{-0.15}$	$2.6^{+0.15}_{-0.15}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	26	T=1.86±20% S=3.35±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 35 мм	35	28	T=2.17±20% S=3.91±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	30	T=2.48±20% S=4.46±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 45 мм	45	32	T=2.79±20% S=5.02±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	T=3.1±20% S=5.58±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 55 мм	55	32	T=3.41±20% S=6.14±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 60 мм	60	32	T=3.72±20% S=6.69±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 65 мм	65	32	T=4.03±20% S=7.25±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 70 мм	70	32	T=4.34±20% S=7.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 75 мм	75	32	T=4.65±20% S=8.37±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 80 мм	80	32	T=4.96±20% S=8.93±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 85 мм	85	32	T=5.27±20% S=9.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 90 мм	90	32	T=5.58±20% S=10.4±20%

Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 95 мм	95	32	T=5.89±20% S=10.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 100 мм	100	32	T=6.2±20% S=11.2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 105 мм	105	32	T=6.5±20% S=11.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 110 мм	110	32	T=6.8±20% S=12.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 115 мм	115	32	T=7.1±20% S=12.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 120 мм	120	32	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 125 мм	125	32	T=7.75±20% S=14±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 130 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 130 мм	130	32	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.0 mm long thread, length: 135 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 135 мм	135	32	T=8.4±20% S=15.1±20%

Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 30 -135 mm increments 5 mm

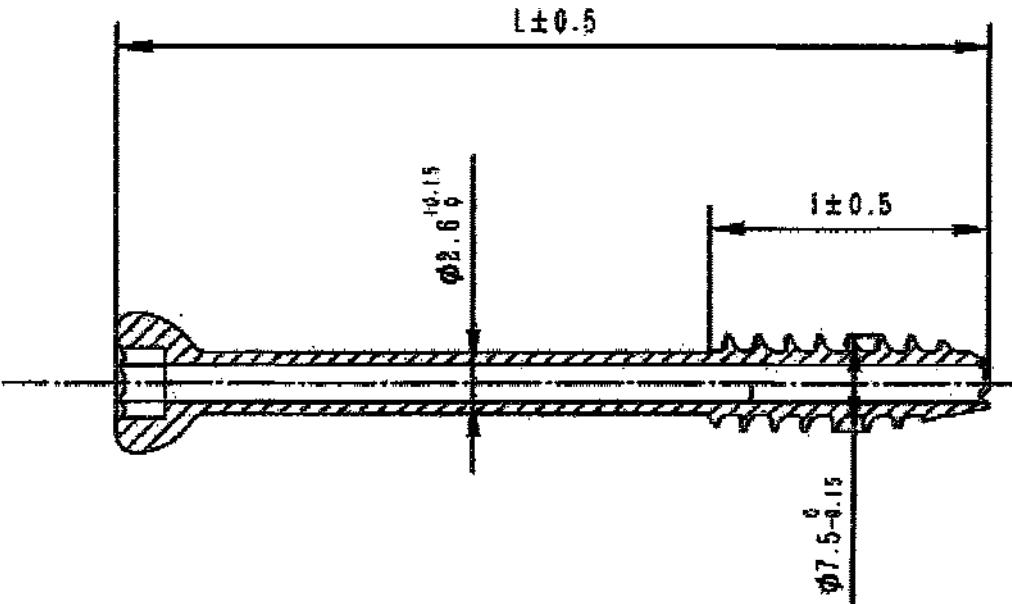


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
7,5 ⁰ _{-0,15}	2,6 ^{+0,15} ₀	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$L \pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $m \pm m$ / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	16	$T=2.11 \pm 20\%$ $S=3.8 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 35 мм	35	16	$T=2.47 \pm 20\%$ $S=4.43 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	16	$T=2.82 \pm 20\%$ $S=5.07 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 45 мм	45	16	$T=3.17 \pm 20\%$ $S=5.7 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	16	$T=3.52 \pm 20\%$ $S=6.33 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 55 мм	55	16	$T=3.88 \pm 20\%$ $S=6.97 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 60 мм	60	16	$T=4.23 \pm 20\%$ $S=7.6 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 65 мм	65	16	$T=4.58 \pm 20\%$ $S=8.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 70 мм	70	16	$T=4.93 \pm 20\%$ $S=8.87 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 75 мм	75	16	$T=5.28 \pm 20\%$ $S=9.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 80 мм	80	16	$T=5.64 \pm 20\%$ $S=10.14 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 85 мм	85	16	$T=6 \pm 20\%$ $S=10.8 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 90 мм	90	16	$T=6.35 \pm 20\%$ $S=11.4 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 95 мм	95	16	T=6.7±20% S=12.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 100 мм	100	16	T=7.05±20% S=12.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 105 мм	105	16	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 110 мм	110	16	T=7.75±20% S=14.0±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 115 мм	115	16	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 120 мм	120	16	T=8.45±20% S=15.2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 125 мм	125	16	T=8.8±20% S=15.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 130 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 130 мм	130	16	T=9.1±20% S=16.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm, short thread, length: 135 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 135 мм	135	16	T=9.45±20% S=17±20%

Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 30 -135 mm increments 5 mm

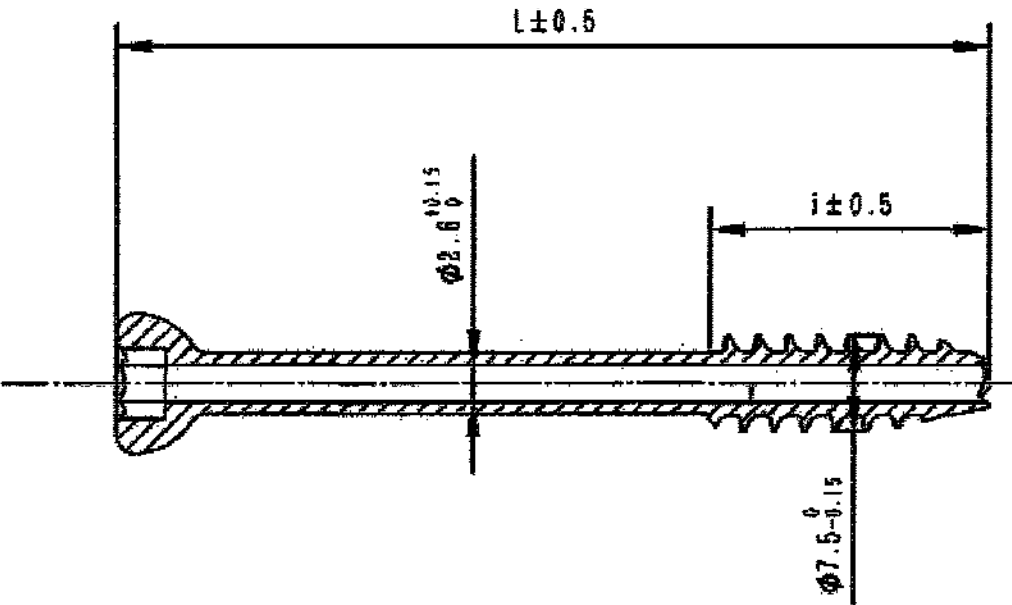


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$7,5^{+0}_{-0,15}$	$2,6^{+0,15}_{-0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L±0,5, мм (mm)	l±0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	26	T=2.11±20% S=3.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 35 мм	35	28	T=2.47±20% S=4.43±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	30	T=2.82±20% S=5.07±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 45 мм	45	32	T=3.17±20% S=5.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	T=3.52±20% S=6.33±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 55 мм	55	32	T=3.88±20% S=6.97±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 60 мм	60	32	T=4.23±20% S=7.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 65 мм	65	32	T=4.58±20% S=8.24±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 70 мм	70	32	T=4.93±20% S=8.87±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 75 мм	75	32	T=5.28±20% S=9.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 80 мм	80	32	T=5.64±20% S=10.14±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 85 мм	85	32	T=6±20% S=10.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 90 мм	90	32	T=6.35±20% S=11.4±20%

Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 95 мм	95	32	T=6.7±20% S=12.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 100 мм	100	32	T=7.05±20% S=12.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 105 мм	105	32	T=7.4±20% S=13.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 110 мм	110	32	T=7.75±20% S=14.0±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 115 мм	115	32	T=8.1±20% S=14.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 120 мм	120	32	T=8.45±20% S=15.2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 125 мм	125	32	T=8.8±20% S=15.83±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 130 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 130 мм	130	32	T=9.1±20% S=16.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 7.5 mm long thread, length: 135 mm	Винт канюлированный HBQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 135 мм	135	32	T=9.45±20% S=17±20%

Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm

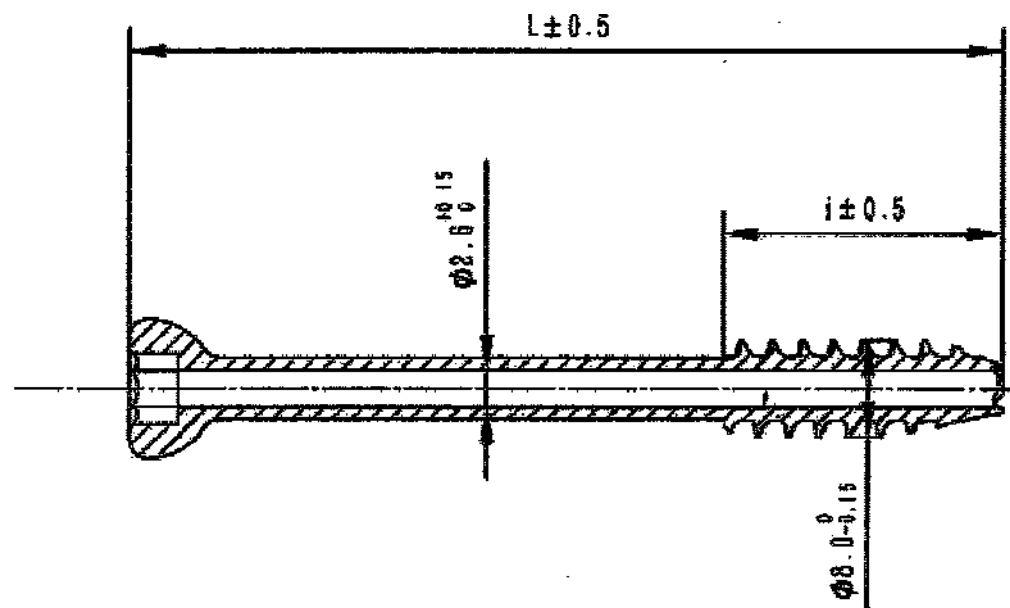


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
$8^{0}_{-0.15}$	$2,6^{+0.15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ±0.5, мм (mm)	l ±0.5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 30 мм	30	26	T=3.8±20% S=6.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 35 мм	35	28	T=4.5±20% S=6.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 40 мм	40	30	T=5.1±20% S=9.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 45 мм	45	32	T=5.7±20% S=10.2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 50 мм	50	32	T=6.4±20% S=11.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 55 мм	55	32	T=7.0±20% S=12.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 60 мм	60	32	T=7.6±20% S=13.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 65 мм	65	32	T=8.3±20% S=14.9±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 70 мм	70	32	T=8.9±20% S=16±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 75 мм	75	32	T=9.6±20% S=17.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 80 мм	80	32	T=10.2±20% S=18.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 85 мм	85	32	T=10.8±20% S=19.4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 90 мм	90	32	T=11.5±20% S=20.6±20%

Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 95 мм	95	32	T=12.1±20% S=21.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 100 мм	100	32	T=12.7±20% S=22.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 105 мм	105	32	T=13.4±20% S=24.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 110 мм	110	32	T=14±20% S=25.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 115 мм	115	32	T=14.7±20% S=26.4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 120 мм	120	32	T=15.3±20% S=27.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, short thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 125 мм	125	32	T=15.9±20% S=28.6±20%

Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm

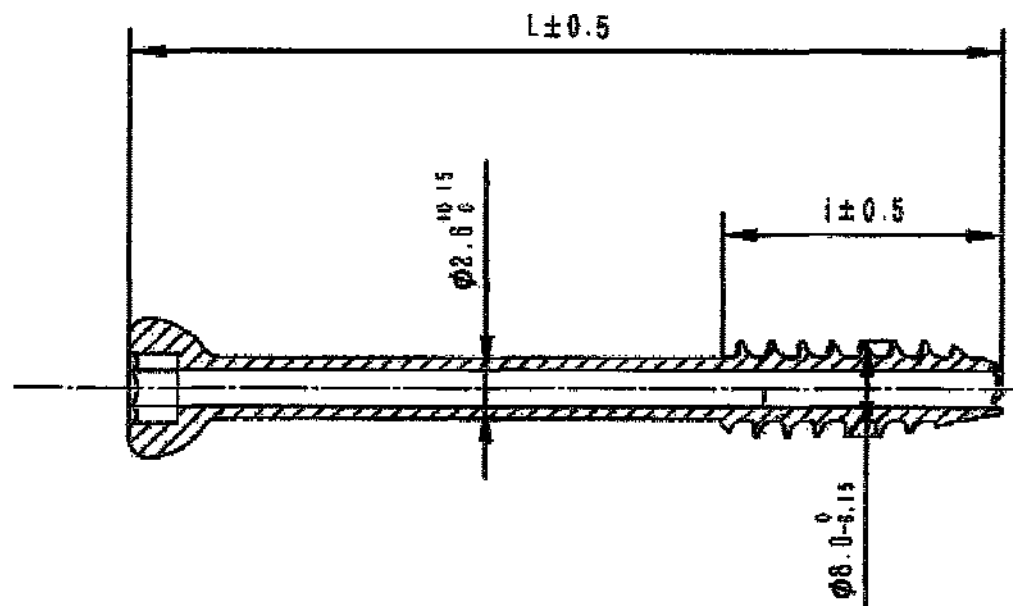


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
$8^{0}_{-0,15}$	$2,6^{+0,15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$\phi \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $S \pm g$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 30 мм	30	26	$T=3.8 \pm 20\%$ $S=6.8 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 35 мм	35	28	$T=4.5 \pm 20\%$ $S=6.8 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 40 мм	40	30	$T=5.1 \pm 20\%$ $S=9.1 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 45 мм	45	32	$T=5.7 \pm 20\%$ $S=10.2 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 50 мм	50	32	$T=6.4 \pm 20\%$ $S=11.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 55 мм	55	32	$T=7.0 \pm 20\%$ $S=12.5 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 60 мм	60	32	$T=7.6 \pm 20\%$ $S=13.6 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 65 мм	65	32	$T=8.3 \pm 20\%$ $S=14.9 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 70 мм	70	32	$T=8.9 \pm 20\%$ $S=16 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 75 мм	75	32	$T=9.6 \pm 20\%$ $S=17.3 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 80 мм	80	32	$T=10.2 \pm 20\%$ $S=18.3 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 85 мм	85	32	$T=10.8 \pm 20\%$ $S=19.4 \pm 20\%$
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 90 мм	90	32	$T=11.5 \pm 20\%$ $S=20.6 \pm 20\%$

Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 95 мм	95	32	T=12.1±20% S=21.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 100 мм	100	32	T=12.7±20% S=22.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 105 мм	105	32	T=13.4±20% S=24.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 110 мм	110	32	T=14±20% S=25.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 115 мм	115	32	T=14.7±20% S=26.4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 120 мм	120	32	T=15.3±20% S=27.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, long thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 125 мм	125	32	T=15.9±20% S=28.6±20%

Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 30 -125 mm increments 5 mm

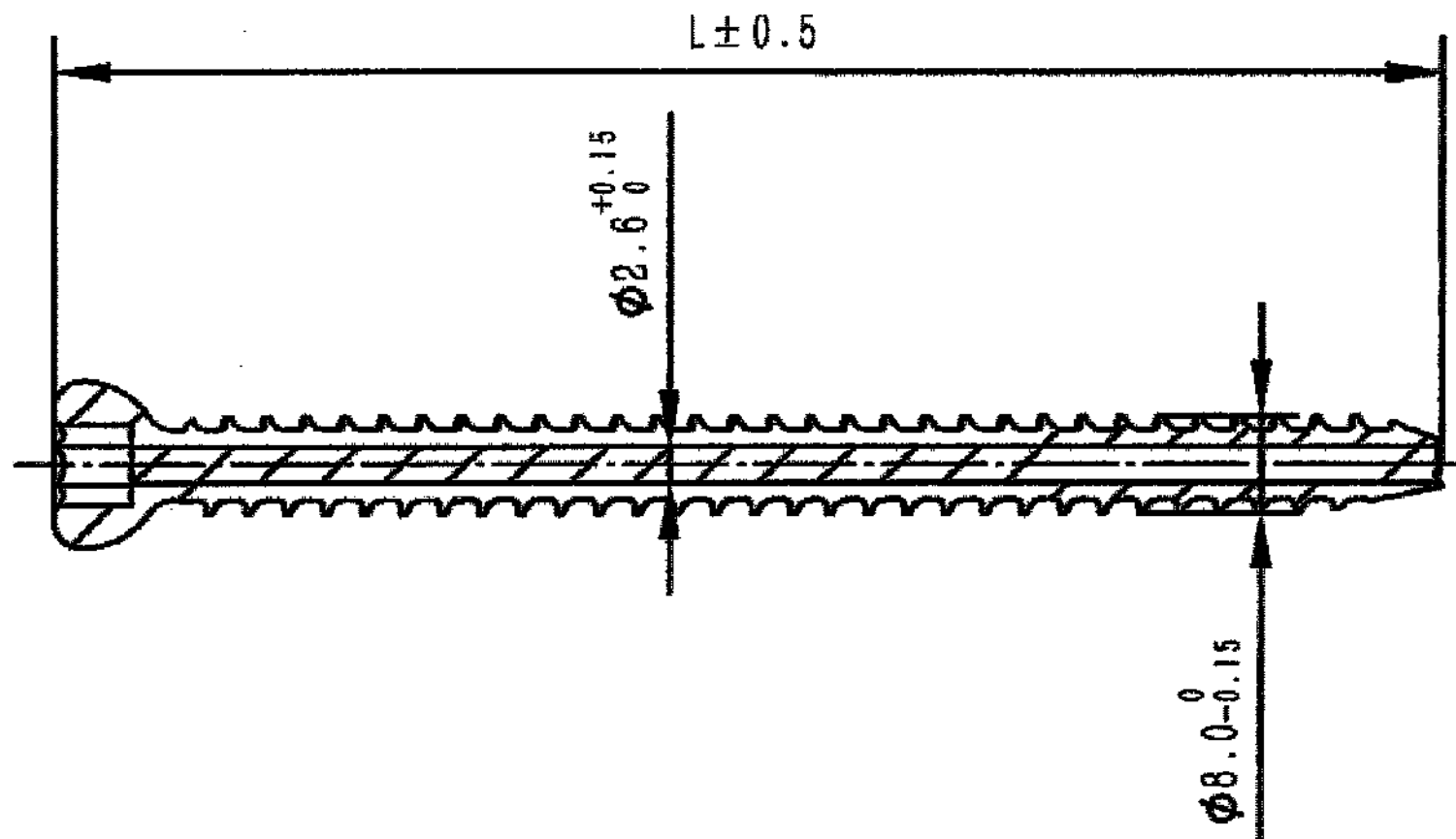


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$8_{-0.15}^0$	$2.6_{+0.15}^0$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L = 0.5, mm (mm)	Масса с допустимостями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 30 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 30 мм	30	T=3.8±20% S=6.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 35 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 35 мм	35	T=4.5±20% S=6.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 40 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 40 мм	40	T=5.1±20% S=9.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 45 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 45 мм	45	T=5.7±20% S=10.2±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 50 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 50 мм	50	T=6.4±20% S=11.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 55 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 55 мм	55	T=7.0±20% S=12.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 60 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 60 мм	60	T=7.6±20% S=13.6±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 65 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 65 мм	65	T=8.3±20% S=14.9±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 70 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 70 мм	70	T=8.9±20% S=16±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 75 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 75 мм	75	T=9.6±20% S=17.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 80 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 80 мм	80	T=10.2±20% S=18.3±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 85 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 85 мм	85	T=10.8±20% S=19.4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 90 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 90 мм	90	T=11.5±20% S=20.6±20%

Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 95 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 95 мм	95	T=12.1±20% S=21.7±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 100 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 100 мм	100	T=12.7±20% S=22.8±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 105 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 105 мм	105	T=13.4±20% S=24.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 110 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 110 мм	110	T=14±20% S=25.1±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 115 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 115 мм	115	T=14.7±20% S=26.4±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 120 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 120 мм	120	T=15.3±20% S=27.5±20%
Screw Cannulated HBQ03, 8.0 mm, fully thread, length: 125 mm	Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 125 мм	125	T=15.9±20% S=28.6±20%

Винт канюлированный HAQ06, 4,5 мм, спонгиозный, длина: 16 мм, 24 мм, 32 мм / Screw Cannulated HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 16 mm, 24 mm, 32 mm

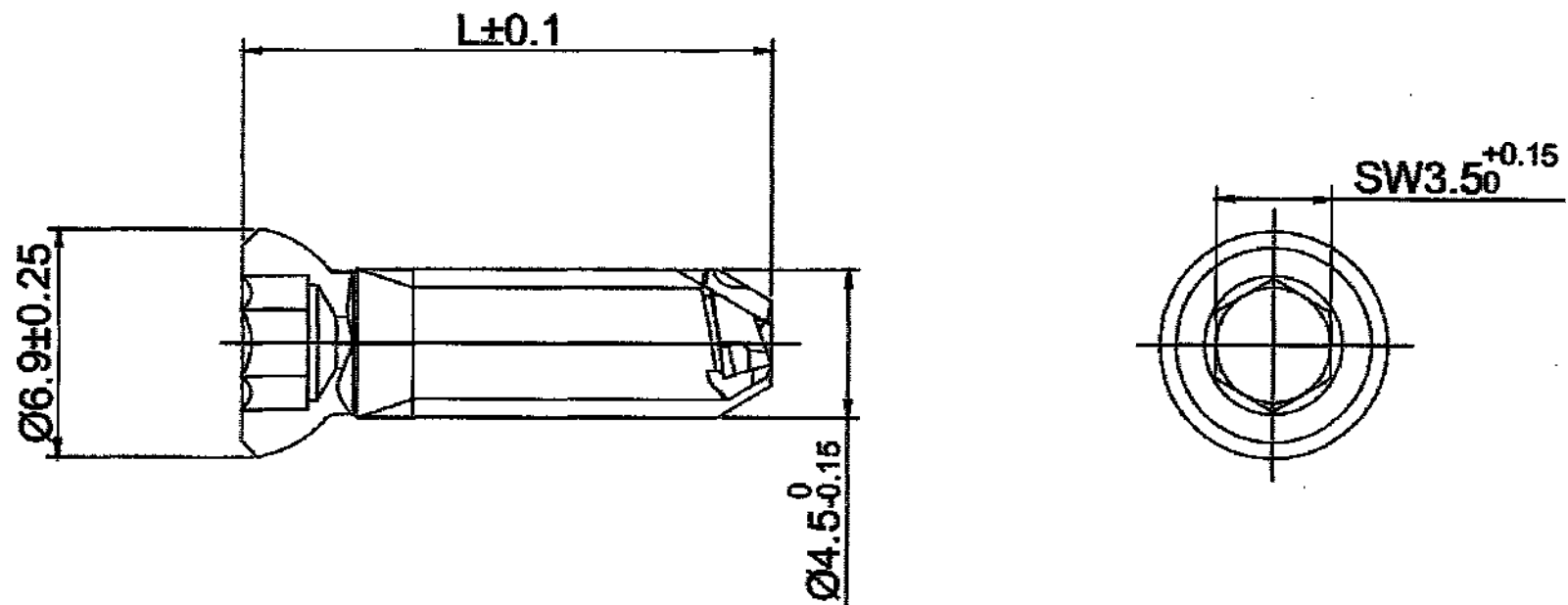

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр головки винта с погрешностями, мм ± мм	Размер шестигранника, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Hex's size, mm	Roughness, µm, not more
$4.5^{0}_{-0.15}$	6.9 ± 0.25	$3.5^{+0.15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ± 0,1 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г/ Mass with tolerances, g ± g
Винт канюлированный HAQ06, 4,5 мм, спонгиозный, длина: 16 мм	Screw Cannulated HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 16 mm	16	T=0.51±20% S=0.91±20%
Винт канюлированный HAQ06, 4,5 мм, спонгиозный, длина: 24 мм	Screw Cannulated HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 24 mm	24	T=0.75±20% S=1.34±20%
Винт канюлированный HAQ06, 4,5 мм, спонгиозный, длина: 32 мм	Screw Cannulated HAQ06, 4.5 mm, Cancellous, length: 32 mm	32	T=1±20% S=1.8±20%


Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 40-95 мм с шагом 5 мм / Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 40-95 mm increments 5 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Размер шестигранника, мм	Шероховатость, мкм, не более
Diameter with tolerances, mm ± mm	Hex's size, mm	Roughness, µm, not more
$5^{0}_{-0,15}$	$4,5^{+0,15}_{0}$	0,8 1,6 3,2

Описание	Description	L ± 0,1 мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 40 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 40 мм	40	T=2.96±20% S=5.17±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 45 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 45 мм	45	T=3.33±20% S=5.82±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 50 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 50 мм	50	T=3.7±20% S=6.47±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 55 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 55 мм	55	T=4.08±20% S=7.11±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 60 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 60 мм	60	T=4.45±20% S=7.76±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 65 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 65 мм	65	T=4.82±20% S=8.41±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 70 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 70 мм	70	T=5.1±20% S=9.05±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 75 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 75 мм	75	T=5.56±20% S=9.7±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 80 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 80 мм	80	T=5.93±20% S=10.3±20%

Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 85 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 85 мм	85	T=6.3±20% S=10.9±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 90 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 90 мм	90	T=6.67±20% S=11.64±20%
Screw Cannulated NonLocking HAQ 02, 5,0 mm, with Partial Thread, length: 95 mm	Винт канюлированный нефиксирующий, HAQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 95 мм	95	T=7.04±20% S=12.29±20%


Шайба НАQ 02 диаметр 6,5, 7,0, 10,0, 13,0 мм / Washer НАQ 02, diameter 6.5, 7.0, 10.0, 13.0 mm

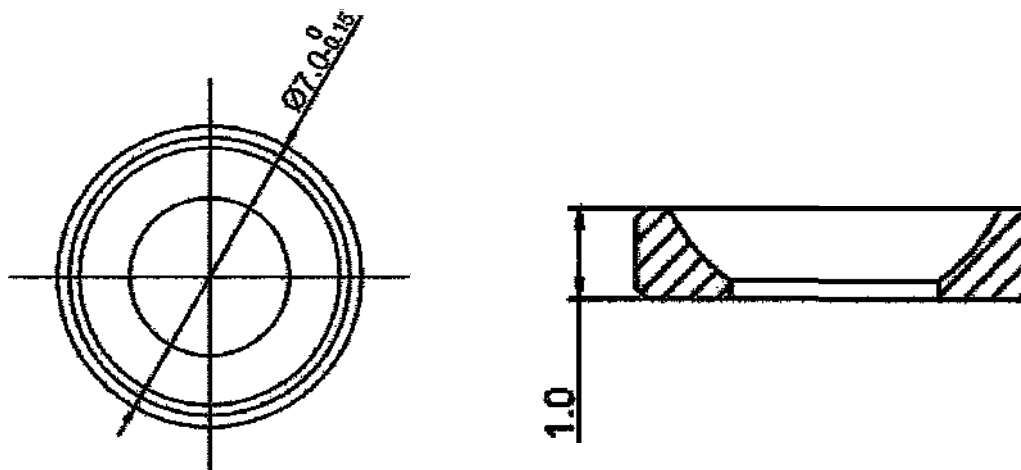

Диаметр шайбы с погрешностями, мм ± мм	Толщина шайбы с погрешностями, мм ± мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Diameter washer with tolerances, mm ± mm	Washer thickness with tolerance, mm ± mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
6,5 ⁰ _{-0,15}	1±0,25	T=0.2±20% S=0.36±20%	0,4 0,8 1,6
7 ⁰ _{-0,15}		T=0.3±20% S=0.55±20%	
10 ⁰ _{-0,15}		T=0.6±20% S=1.0±20%	
13 ⁰ _{-0,15}		T=1.0±20% S=1.8±20%	

Винт канолированный Херберта / Screw Cannulated Herbert

Винт канолированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 10 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

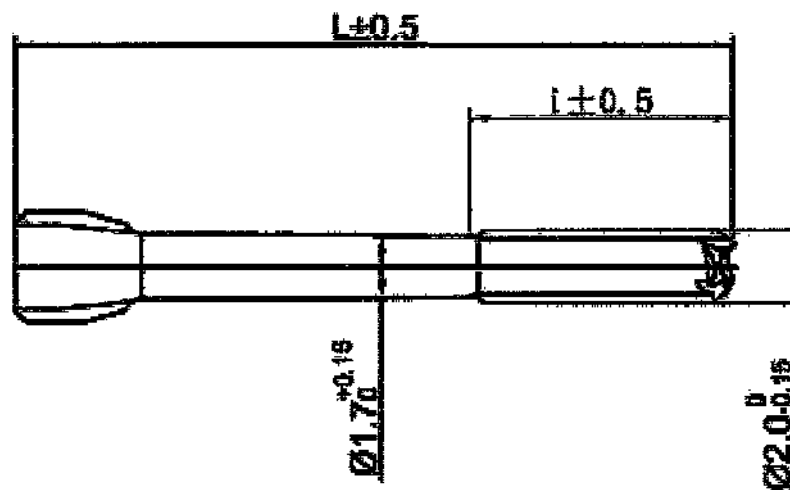


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$2^{+0}_{-0.15}$	$1.7^{+0.15}_0$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$L \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $S \pm s$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 10 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10 мм	10	4	$T=0.07 \pm 20\%$ $S=0.13 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 11 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 11 мм	11	4	$T=0.07 \pm 20\%$ $S=0.13 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 12 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 12 мм	12	4	$T=0.08 \pm 20\%$ $S=0.15 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 13 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 13 мм	13	4	$T=0.09 \pm 20\%$ $S=0.16 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 14 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 14 мм	14	4	$T=0.1 \pm 20\%$ $S=0.18 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 15 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 15 мм	15	4	$T=0.1 \pm 20\%$ $S=0.18 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	4	$T=0.11 \pm 20\%$ $S=0.20 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 17 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 17 мм	17	4	$T=0.11 \pm 20\%$ $S=0.20 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	4	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 19 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 19 мм	19	4	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	4	$T=0.13 \pm 20\%$ $S=0.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 21 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 21 мм	21	4	$T=0.13 \pm 20\%$ $S=0.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	4	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 23 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 23 мм	23	4	$T=0.14\pm 20\%$ $S=0.25\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	5	$T=0.15\pm 20\%$ $S=0.27\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 25 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 25 мм	25	5	$T=0.16\pm 20\%$ $S=0.29\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	5	$T=0.17\pm 20\%$ $S=0.31\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 27 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 27 мм	27	6	$T=0.17\pm 20\%$ $S=0.31\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	6	$T=0.18\pm 20\%$ $S=0.32\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 29 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 29 мм	29	6	$T=0.18\pm 20\%$ $S=0.32\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	7	$T=0.2\pm 20\%$ $S=0.36\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	7	$T=0.21\pm 20\%$ $S=0.37\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	8	$T=0.22\pm 20\%$ $S=0.39\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	9	$T=0.23\pm 20\%$ $S=0.41\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	9	$T=0.24\pm 20\%$ $S=0.43\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	10	$T=0.25\pm 20\%$ $S=0.45\pm 20\%$

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 16-29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

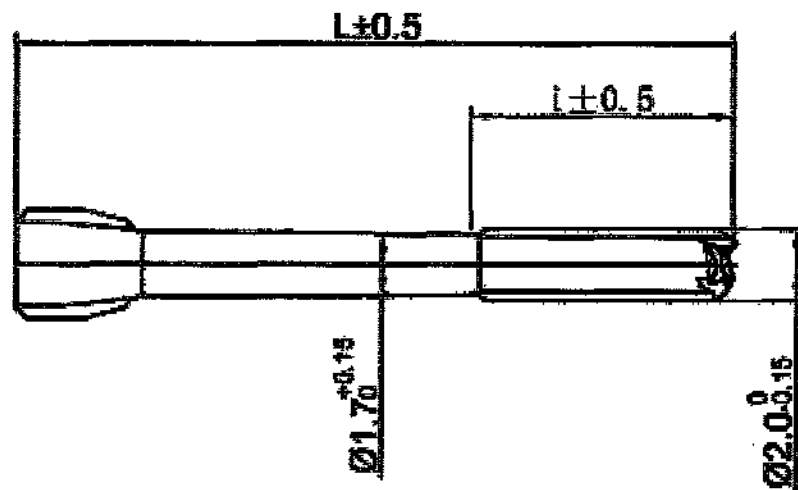


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
$2^{+0}_{-0.15}$	$1.7^{+0.15}_{0}$	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$\varnothing \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $S \pm s$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 10 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 10 мм	10	4	$T=0.11 \pm 20\%$ $S=0.20 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 11 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 11 мм	11	4	$T=0.11 \pm 20\%$ $S=0.20 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 12 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 12 мм	12	4	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 13 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 13 мм	13	4	$T=0.12 \pm 20\%$ $S=0.22 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 14 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 14 мм	14	4	$T=0.13 \pm 20\%$ $S=0.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 15 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 15 мм	15	4	$T=0.13 \pm 20\%$ $S=0.24 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	4	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 17 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 17 мм	17	4	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	4	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.27 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 19 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 19 мм	19	4	$T=0.16 \pm 20\%$ $S=0.29 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	4	$T=0.17 \pm 20\%$ $S=0.31 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 21 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 21 мм	21	4	$T=0.17 \pm 20\%$ $S=0.31 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	4	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 23 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 23 мм	23	4	$T=0.18\pm 20\%$ $S=0.32\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	4	$T=0.2\pm 20\%$ $S=0.36\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 25 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 25 мм	25	4	$T=0.21\pm 20\%$ $S=0.37\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	4	$T=0.22\pm 20\%$ $S=0.39\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 27 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 27 мм	27	4	$T=0.23\pm 20\%$ $S=0.41\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	4	$T=0.24\pm 20\%$ $S=0.43\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 29 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 29 мм	29	4	$T=0.25\pm 20\%$ $S=0.45\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	5	$T=0.26\pm 20\%$ $S=0.47\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	5	$T=0.27\pm 20\%$ $S=0.49\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	5	$T=0.28\pm 20\%$ $S=0.51\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	6	$T=0.28\pm 20\%$ $S=0.52\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	6	$T=0.29\pm 20\%$ $S=0.53\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.0 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	6	$T=0.30\pm 20\%$ $S=0.55\pm 20\%$

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 10 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

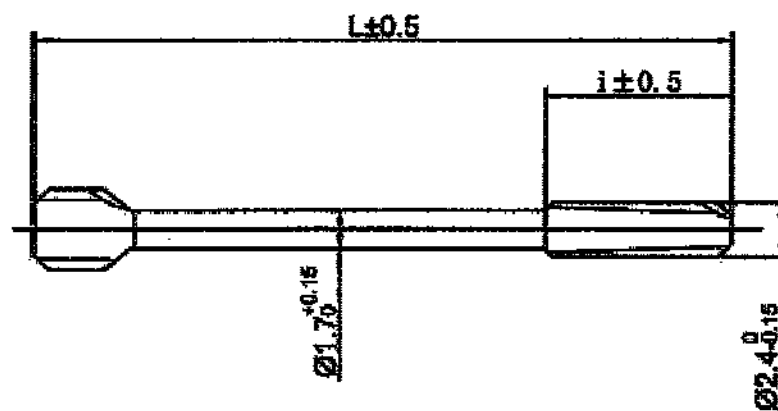


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм. не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
2,4 ⁰ _{-0,15}	1,7 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	L ±0,5, мм (mm)	±0,5, мм (mm)	Масса, с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 10 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 10 мм	10	4	T=0.09±20% S=0.16±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 11 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 11 мм	11	4	T=0.1±20% S=0.18±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 12 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 12 мм	12	4	T=0.11±20% S=0.19±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 13 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 13 мм	13	4	T=0.11±20% S=0.19±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 14 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 14 мм	14	4	T=0.12±20% S=0.21±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 15 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 15 мм	15	4	T=0.13±20% S=0.23±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	4	T=0.14±20% S=0.25±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 17 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 17 мм	17	4	T=0.15±20% S=0.27±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	4	T=0.16±20% S=0.28±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 19 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 19 мм	19	4	T=0.17±20% S=0.3±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	4	T=0.18±20% S=0.32±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 21 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 21 мм	21	4	T=0.19±20% S=0.33±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2,4 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	4	T=0.2±20% S=0.35±20%

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 23 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 23 мм	23	4	$T=0.2\pm 20\%$ $S=0.35\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	5	$T=0.21\pm 20\%$ $S=0.36\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 25 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 25 мм	25	5	$T=0.22\pm 20\%$ $S=0.38\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	5	$T=0.23\pm 20\%$ $S=0.41\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 27 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 27 мм	27	6	$T=0.24\pm 20\%$ $S=0.43\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	6	$T=0.25\pm 20\%$ $S=0.44\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 29 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 29 мм	29	6	$T=0.26\pm 20\%$ $S=0.46\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	7	$T=0.27\pm 20\%$ $S=0.48\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	7	$T=0.29\pm 20\%$ $S=0.52\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	8	$T=0.3\pm 20\%$ $S=0.54\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	9	$T=0.32\pm 20\%$ $S=0.57\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	9	$T=0.34\pm 20\%$ $S=0.61\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	10	$T=0.36\pm 20\%$ $S=0.64\pm 20\%$

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 16 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

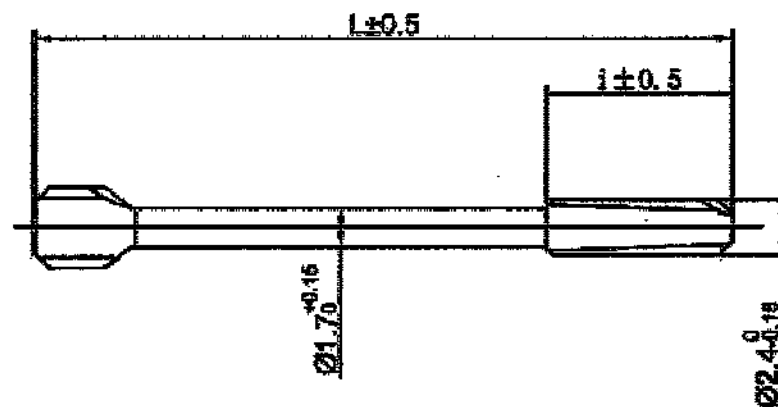


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
2,4 ⁰ _{-0,15}	1,7 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 1,6

Description	Описание	$L \pm 0,5$, мм (mm)	$l \pm 0,5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $g \pm g$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	4	$T=0.14 \pm 20\%$ $S=0.25 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 17 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 17 мм	17	4	$T=0.15 \pm 20\%$ $S=0.27 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	4	$T=0.16 \pm 20\%$ $S=0.28 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 19 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 19 мм	19	4	$T=0.17 \pm 20\%$ $S=0.3 \pm 0.6$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	4	$T=0.18 \pm 20\%$ $S=0.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 21 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 21 мм	21	4	$T=0.19 \pm 20\%$ $S=0.33 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	4	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.35 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 23 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 23 мм	23	4	$T=0.2 \pm 20\%$ $S=0.35 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	4	$T=0.21 \pm 20\%$ $S=0.36 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 25 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 25 мм	25	4	$T=0.22 \pm 20\%$ $S=0.38 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	4	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.41 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 27 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 27 мм	27	4	$T=0.24 \pm 20\%$ $S=0.43 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	4	$T=0.25 \pm 20\%$ $S=0.44 \pm 20\%$

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 29 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 29 мм	29	4	$T=0.26\pm 20\%$ $S=0.46\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	5	$T=0.27\pm 20\%$ $S=0.48\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	5	$T=0.29\pm 20\%$ $S=0.52\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	5	$T=0.3\pm 20\%$ $S=0.54\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	6	$T=0.32\pm 20\%$ $S=0.57\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	6	$T=0.34\pm 20\%$ $S=0.61\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 2.4 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	6	$T=0.36\pm 20\%$ $S=0.64\pm 20\%$

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 10 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

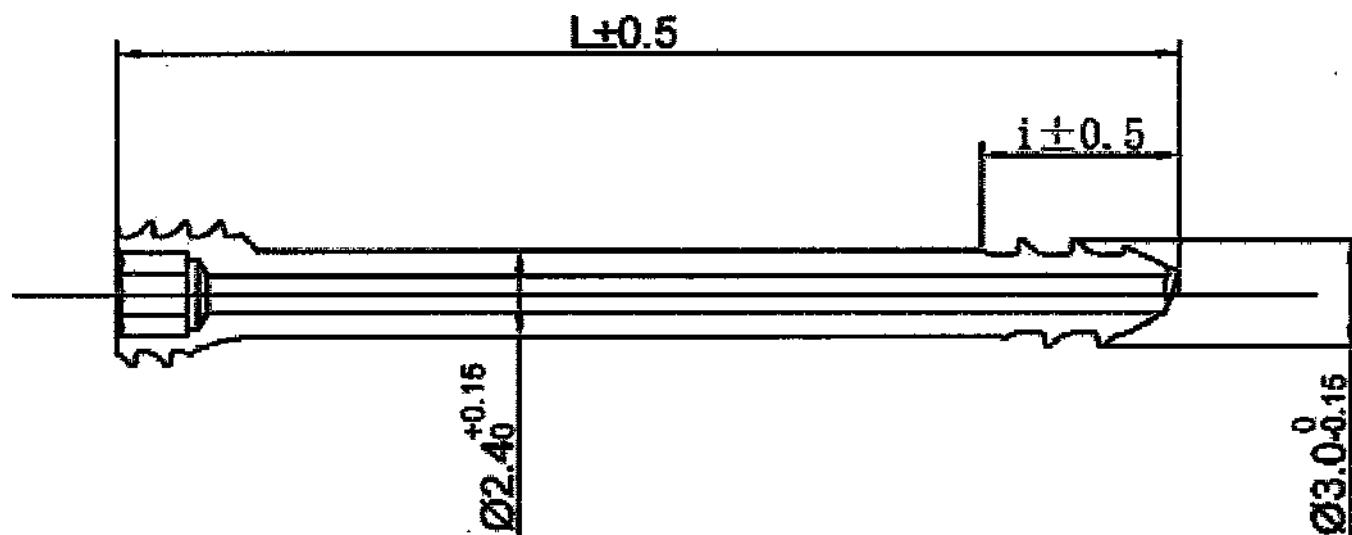


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm , not more
$3^{+0}_{-0.15}$	$2.4^{+0.15}_0$	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	L $\pm$ 0,5, мм (mm)	H0,5, мм (mm)	Масса г погрешностями, г $\pm$ г / Mass with tolerances, g $\pm$ g
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10 мм	10	4	T=0.14 $\pm$ 20% S=0.25 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 11 мм	11	4	T=0.15 $\pm$ 20% S=0.27 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 12 мм	12	4	T=0.17 $\pm$ 20% S=0.31 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 13 мм	13	4	T=0.18 $\pm$ 20% S=0.33 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 14 мм	14	4	T=0.2 $\pm$ 20% S=0.36 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 15 мм	15	4	T=0.21 $\pm$ 20% S=0.38 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	4	T=0.23 $\pm$ 20% S=0.42 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 17 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 17 мм	17	4	T=0.24 $\pm$ 20% S=0.44 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	4	T=0.26 $\pm$ 20% S=0.47 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 19 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 19 мм	19	4	T=0.27 $\pm$ 20% S=0.49 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	4	T=0.29 $\pm$ 20% S=0.53 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 21 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 21 мм	21	4	T=0.3 $\pm$ 20% S=0.55 $\pm$ 20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3,0 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	4	T=0.32 $\pm$ 20% S=0.58 $\pm$ 20%

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 23 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 23 мм	23	4	$T=0.33\pm 20\%$ $S=0.6\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	5	$T=0.35\pm 20\%$ $S=0.63\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 25 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 25 мм	25	5	$T=0.36\pm 20\%$ $S=0.65\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	5	$T=0.38\pm 20\%$ $S=0.69\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 27 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 27 мм	27	6	$T=0.39\pm 20\%$ $S=0.72\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	6	$T=0.41\pm 20\%$ $S=0.74\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 29 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 29 мм	29	6	$T=0.42\pm 20\%$ $S=0.76\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	7	$T=0.44\pm 20\%$ $S=0.79\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	7	$T=0.47\pm 20\%$ $S=0.85\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	8	$T=0.5\pm 20\%$ $S=0.9\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	9	$T=0.53\pm 20\%$ $S=0.96\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	9	$T=0.56\pm 20\%$ $S=1.0\pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	10	$T=0.59\pm 20\%$ $S=1.06\pm 20\%$

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 16 -29 mm increments 1 mm, 30-40 mm increments 2 mm

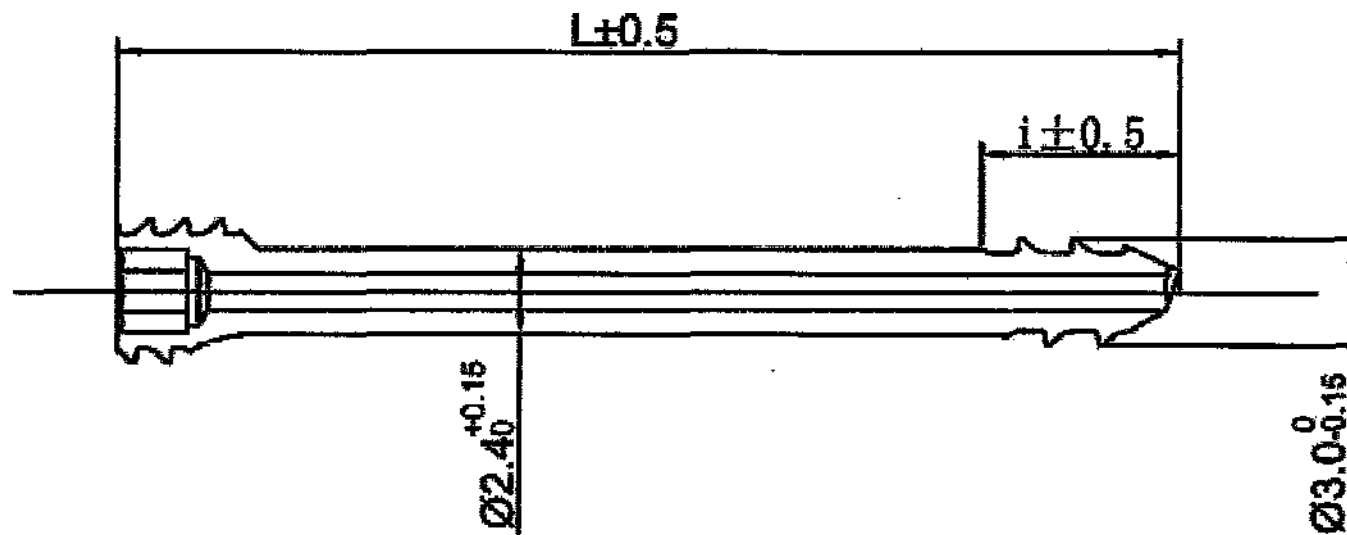


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
$3^{0}_{-0,15}$	$2,4^{+0,15}_{0}$	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$r \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $r \pm r$ / Mass with tolerances, $g \pm g$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 16 мм	16	5	$T=0.23 \pm 20\%$ $S=0.42 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 17 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 17 мм	17	6	$T=0.24 \pm 20\%$ $S=0.44 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 18 мм	18	6	$T=0.26 \pm 20\%$ $S=0.47 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 19 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 19 мм	19	7	$T=0.27 \pm 20\%$ $S=0.49 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	7	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.53 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 21 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 21 мм	21	8	$T=0.3 \pm 20\%$ $S=0.55 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	8	$T=0.32 \pm 20\%$ $S=0.58 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 23 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 23 мм	23	8	$T=0.33 \pm 20\%$ $S=0.6 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	8	$T=0.35 \pm 20\%$ $S=0.63 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 25 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 25 мм	25	8	$T=0.36 \pm 20\%$ $S=0.65 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	10	$T=0.38 \pm 20\%$ $S=0.69 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 27 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 27 мм	27	10	$T=0.39 \pm 20\%$ $S=0.72 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	10	$T=0.41 \pm 20\%$ $S=0.74 \pm 20\%$

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 29 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 29 мм	29	10	T=0.42±20% S=0.76±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	12	T=0.44±20% S=0.79±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	12	T=0.47±20% S=0.85±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	14	T=0.5±20% S=0.9±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	14	T=0.53±20% S=0.96±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	16	T=0.56±20% S=1.0±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 3.0 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	16	T=0.59±20% S=1.06±20%

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 16-60 мм с шагом 2 мм, 64-72 мм с шагом 4 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 16 -60 mm increments 2 mm, 64 -72 mm increments 4 mm

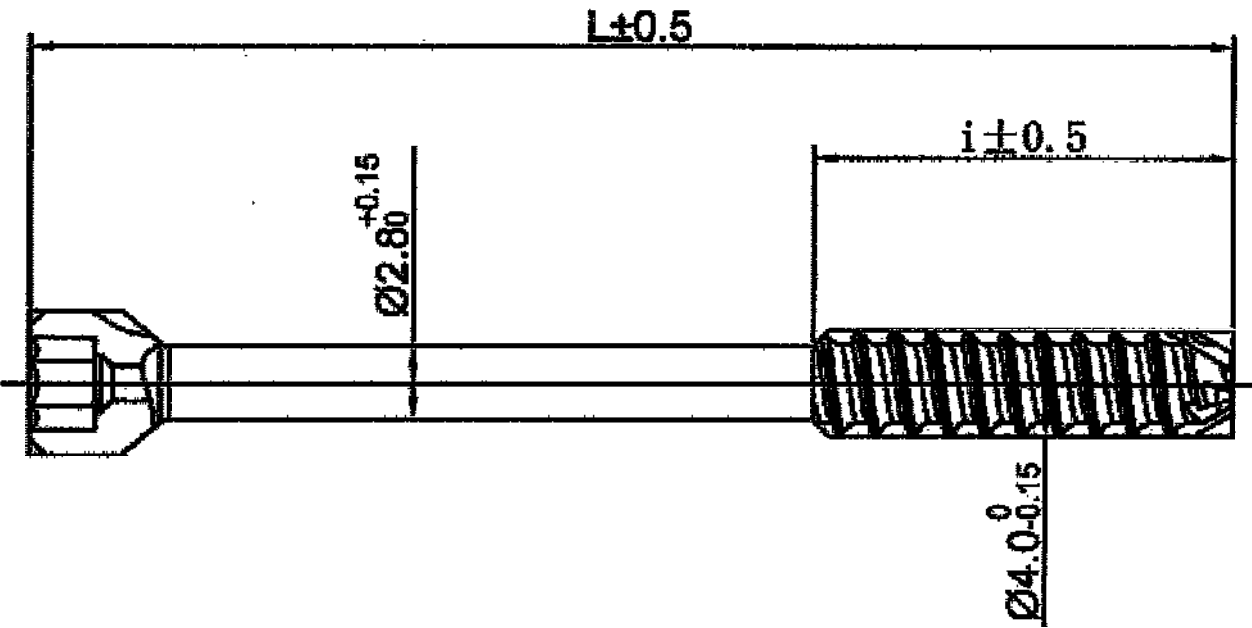


Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, μm, not more
4 ⁰ _{-0.15}	2,8 ^{+0.15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	± 0.5 , мм (mm)	Масса с допустимостями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $T \pm t$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 16 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 16 мм	16	5	$T=0.29 \pm 20\%$ $S=0.53 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 18 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 18 мм	18	6	$T=0.33 \pm 20\%$ $S=0.6 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 20 мм	20	6	$T=0.37 \pm 20\%$ $S=0.66 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 22 мм	22	8	$T=0.4 \pm 20\%$ $S=0.73 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 24 мм	24	8	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 26 мм	26	9	$T=0.48 \pm 20\%$ $S=0.86 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 28 мм	28	9	$T=0.52 \pm 20\%$ $S=0.93 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 30 мм	30	10	$T=0.55 \pm 20\%$ $S=0.99 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 32 мм	32	10	$T=0.59 \pm 20\%$ $S=1.06 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 34 мм	34	12	$T=0.63 \pm 20\%$ $S=1.13 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 36 мм	36	12	$T=0.66 \pm 20\%$ $S=1.19 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 38 мм	38	13	$T=0.7 \pm 20\%$ $S=1.26 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 40 мм	40	13	$T=0.74 \pm 20\%$ $S=1.32 \pm 20\%$

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 42 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 42 мм	42	14	T=0.77±20% S=1.39±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 44 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 44 мм	44	14	T=0.81±20% S=1.46±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 46 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 46 мм	46	16	T=0.85±20% S=1.52±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 48 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 48 мм	48	16	T=0.88±20% S=1.59±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 50 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 50 мм	50	17	T=0.92±20% S=1.65±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 52 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 52 мм	52	17	T=0.96±20% S=1.72±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 54 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 54 мм	54	18	T=0.99±20% S=1.79±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 56 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 56 мм	56	18	T=1.03±20% S=1.85±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 58 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 58 мм	58	20	T=1.07±20% S=1.92±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 60 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 60 мм	60	20	T=1.1±20% S=2±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 64 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 64 мм	64	22	T=1.18±20% S=2.12±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 68 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 68 мм	68	23	T=1.26±20% S=2.26±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, short thread, length: 72 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 72 мм	72	24	T=1.34±20% S=2.41±20%

Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 64-72 мм с шагом 4 мм / Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 20 -60 mm increments 2 mm, 64 -72 mm increments 4 mm

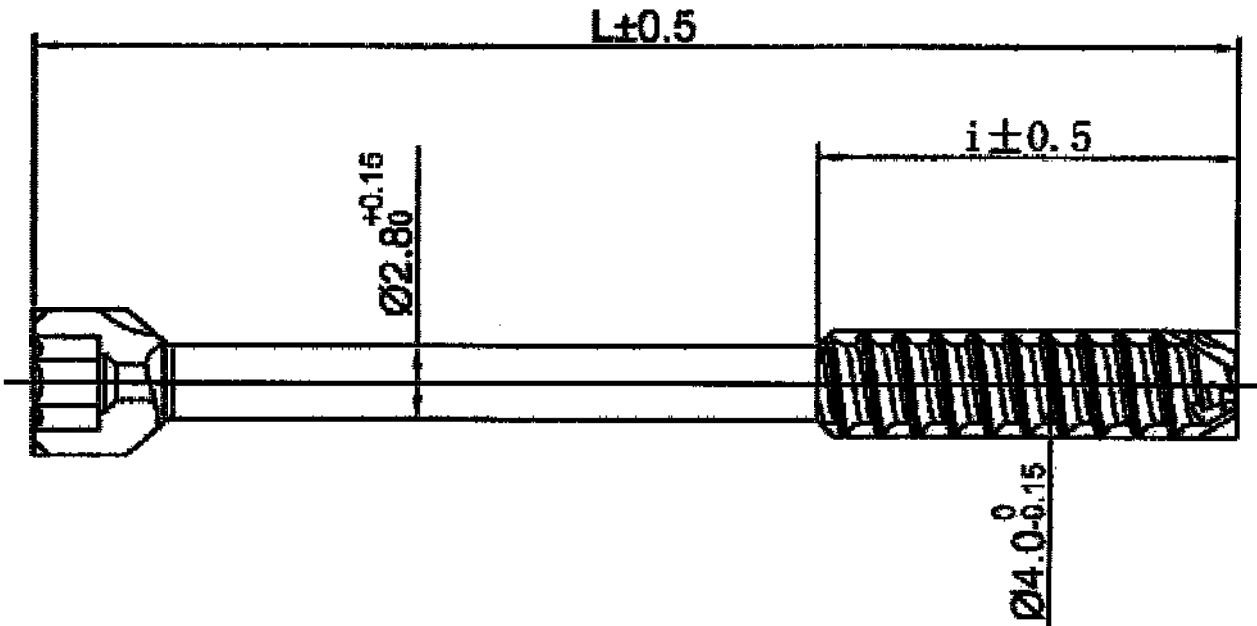

Макс. диаметр резьбы, мм	Мин. диаметр резьбы, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Min Diameter thread, mm	Roughness, µm, not more
4 ⁰ _{-0,15}	2,8 ^{+0,15} ₀	0,4 0,8 3,2

Description	Описание	$L \pm 0.5$, мм (mm)	$H \pm 0.5$, мм (mm)	Масса с погрешностями, $T \pm t$ / Mass with tolerances, $T \pm t$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 20 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 20 мм	20	10	$T=0.37 \pm 20\%$ $S=0.66 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 22 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 22 мм	22	11	$T=0.4 \pm 20\%$ $S=0.73 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 24 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 24 мм	24	12	$T=0.44 \pm 20\%$ $S=0.79 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 26 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 26 мм	26	13	$T=0.48 \pm 20\%$ $S=0.86 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 28 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 28 мм	28	14	$T=0.52 \pm 20\%$ $S=0.93 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 30 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 30 мм	30	15	$T=0.55 \pm 20\%$ $S=0.99 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 32 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 32 мм	32	16	$T=0.59 \pm 20\%$ $S=1.06 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 34 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 34 мм	34	17	$T=0.63 \pm 20\%$ $S=1.13 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 36 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 36 мм	36	18	$T=0.66 \pm 20\%$ $S=1.19 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 38 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 38 мм	38	19	$T=0.7 \pm 20\%$ $S=1.26 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 40 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 40 мм	40	20	$T=0.74 \pm 20\%$ $S=1.32 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 42 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 42 мм	42	21	$T=0.77 \pm 20\%$ $S=1.39 \pm 20\%$
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 44 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 44 мм	44	22	$T=0.81 \pm 20\%$ $S=1.46 \pm 20\%$

Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 46 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 46 мм	46	23	T=0.85±20% S=1.52±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 48 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 48 мм	48	24	T=0.88±20% S=1.59±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 50 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 50 мм	50	25	T=0.92±20% S=1.65±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 52 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 52 мм	52	26	T=0.96±20% S=1.72±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 54 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 54 мм	54	27	T=0.99±20% S=1.79±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 56 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 56 мм	56	28	T=1.03±20% S=1.85±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 58 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 58 мм	58	29	T=1.07±20% S=1.92±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 60 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 60 мм	60	30	T=1.1±20% S=2±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 64 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 64 мм	64	32	T=1.18±20% S=2.12±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 68 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 68 мм	68	34	T=1.26±20% S=2.26±20%
Screw Cannulated Herbert HAQ06, 4.0 mm, long thread, length: 72 mm	Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 72 мм	72	36	T=1.34±20% S=2.41±20%

Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 40 -100 мм с шагом 5 мм / Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 40 -100 mm increments 5 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, μm, not more
$5_{-0,15}^0$	$4,5_{0}^{+0,15}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0,5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 40 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 40 мм	40	T=3.53±20% S=6.16±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 45 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 45 мм	45	T=3.97±20% S=6.93±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 50 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 50 мм	50	T=4.41±20% S=7.7±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 55 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 55 мм	55	T=4.85±20% S=8.47±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 60 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 60 мм	60	T=5.29±20% S=9.24±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 65 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 65 мм	65	T=5.74±20% S=10.01±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 70 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 70 мм	70	T=6.18±20% S=10.78±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 75 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 75 мм	75	T=6.62±20% S=11.55±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 80 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 80 мм	80	T=7.06±20% S=12.32±20%

Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 85 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 85 мм	85	T=7.5±20% S=13.09±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 90 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 90 мм	90	T=7.94±20% S=13.86±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 95 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 95 мм	95	T=8.38±20% S=14.63±20%
Bolt Webb HAQ 06, 5.0 mm, length: 100 mm	Болт Уэбба HAQ 06, 5.0мм, длина: 100 мм	100	T=8.83±20% S=15.4±20%

Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 13 X 11 мм, 13 X 13 мм, 13 X 17 мм, 15 X 11 мм, 15 X 13 мм, 15 X 15 мм, 20 X 15 мм, 20 X 20 мм, 20 X 25 мм, 25 X 20 мм / Staples Compression HAQ 06, size 13 X 11 mm, 13 X 13 mm, 13 X 17 mm, 15 X 11 mm, 15 X 13 mm, 15 X 15 mm, 20 X 15 mm, 20 X 20 mm, 20 X 25 mm, 25 X 20 mm

Description	Описание	Ширина погрешностями, мм ± 0,5 mm / Width with tolerance, mm ± 0,5 mm	L ± 0,5, мм (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Staples Compression HAQ 06, size 13 X 11 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 13 X 11 мм	13	11	T=5.14±20% S=8.98±20%
Staples Compression HAQ 06, size 13 X 13 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 13 X 13 мм	13	13	T=6.08±20% S=10.61±20%
Staples Compression HAQ 06, size 13 X 17 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 13 X 17 мм	13	17	T=7.95±20% S=13.87±20%
Staples Compression HAQ 06, size 15 X 11 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 15 X 11 мм	15	11	T=5.94±20% S=10.36±20%
Staples Compression HAQ 06, size 15 X 13 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 15 X 13 мм	15	13	T=7.02±20% S=12.24±20%
Staples Compression HAQ 06, size 15 X 15 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 15 X 15 мм	15	15	T=8.1±20% S=14.13±20%
Staples Compression HAQ 06, size 20 X 15 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 20 X 15 мм	20	15	T=10.8±20% S=18.84±20%
Staples Compression HAQ 06, size 20 X 20 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 20 X 20 мм	20	20	T=14.4±20% S=25.12±20%
Staples Compression HAQ 06, size 20 X 25 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 20 X 25 мм	20	25	T=18±20% S=31.4±20%
Staples Compression HAQ 06, size 25 X 20 mm	Скобы компрессионные HAQ 06, размер: 25 X 20 мм	25	20	T=18±20% S=31.4±20%

Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,0 X 11 мм, 2,0 X 12 мм, 2,0 X 14 мм, 2,5 X 11 мм, 2,5 X 13 мм, 2,5 X 15 мм, 2,5 X 17 мм, 2,7 X 13 мм, 2,7 X 15 мм, 2,7 X 17 мм, 2,7 X 19 мм / Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.0 X 11 mm, 2,0 X 12 mm, 2,0 X 14 mm, 2.5 X 11 mm, 2.5 X 13 mm, 2.5 X 15 mm, 2.5 X 17 mm, 2.7 X 13 mm, 2.7 X 15 mm, 2.7 X 17 mm, 2.7 X 19 mm

Description	Описание	Ширина погрешностями, мм ± 0.5 mm / Width with tolerance, mm ± 0.5 mm	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г $\pm \gamma$ / Mass with tolerances, g $\pm \gamma$
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.0 X 11 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,0 X 11 мм	2.0	11	T=0.15 $\pm$ 20% S=0.27 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.0 X 12 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,0 X 12 мм	2.0	12	T=0.17 $\pm$ 20% S=0.29 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.0 X 14 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,0 X 14 мм	2.0	14	T=0.19 $\pm$ 20% S=0.35 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.5 X 11 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,5 X 11 мм	2.5	11	T=0.24 $\pm$ 20% S=0.42 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.5 X 13 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,5 X 13 мм	2.5	13	T=0.28 $\pm$ 20% S=0.5 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.5 X 15 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,5 X 15 мм	2.5	15	T=0.33 $\pm$ 20% S=0.57 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.5 X 17 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,5 X 17 мм	2.5	17	T=0.37 $\pm$ 20% S=0.65 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.7 X 13 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,7 X 13 мм	2.7	13	T=0.33 $\pm$ 20% S=0.58 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.7 X 15 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,7 X 15 мм	2.7	15	T=0.38 $\pm$ 20% S=0.67 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.7 X 17 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,7 X 17 мм	2.7	17	T=0.43 $\pm$ 20% S=0.76 $\pm$ 20%
Screw Twist-Off HAQ 06, size: 2.7 X 19 mm	Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,7 X 19 мм	2.7	19	T=0.49 $\pm$ 20% S=0.85 $\pm$ 20%


Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 50-120 мм с шагом 5 мм / Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 50-120 mm increments 5 mm

Диаметр с погрешностями, мм ± мм	Диаметр отверстия, мм	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Diameter of screw head with tolerances, mm ± mm	Roughness, µm, not more
$12_{-0.15}^0$	$7_{-0}^{+0.15}$	0,8 1,6 3,2

Description	Описание	L ± 0.5 mm (mm)	Масса с погрешностями, г ± г / Mass with tolerances, g ± g
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 50 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 50 мм	50	T=24.02±20% S=41.9±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 55 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 55 мм	55	T=25.15±20% S=43.87±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 60 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 60 мм	60	T=26.28±20% S=45.84±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 65 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 65 мм	65	T=27.41±20% S=47.81±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 70 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 70 мм	70	T=28.54±20% S=49.79±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 75 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 75 мм	75	T=29.67±20% S=51.76±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 80 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 80 мм	80	T=30.08±20% S=53.73±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 85 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 85 мм	85	T=31.93±20% S=55.7±20%


Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 90 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 90 мм	90	T=33.06±20% S=57.67±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 95 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 95 мм	95	T=34.19±20% S=59.65±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 100 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 100 мм	100	T=35.32±20% S=61.62±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 105 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 105 мм	105	T=36.45±20% S=63.59±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 110 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 110 мм	110	T=37.58±20% S=65.56±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 115 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 115 мм	115	T=38.71±20% S=67.53±20%
Screws dynamic Hip (DHS) HBQ03, 12.0 mm, length: 120 mm	Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 120 мм	120	T=39.84±20% S=69.51±20%

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги HAQ 06, размер 2.8 X 9 мм, угол: 0° / Screw Fixation for Hammertoe HAQ 06, size: 2.8 X 9 mm, angle: 0°

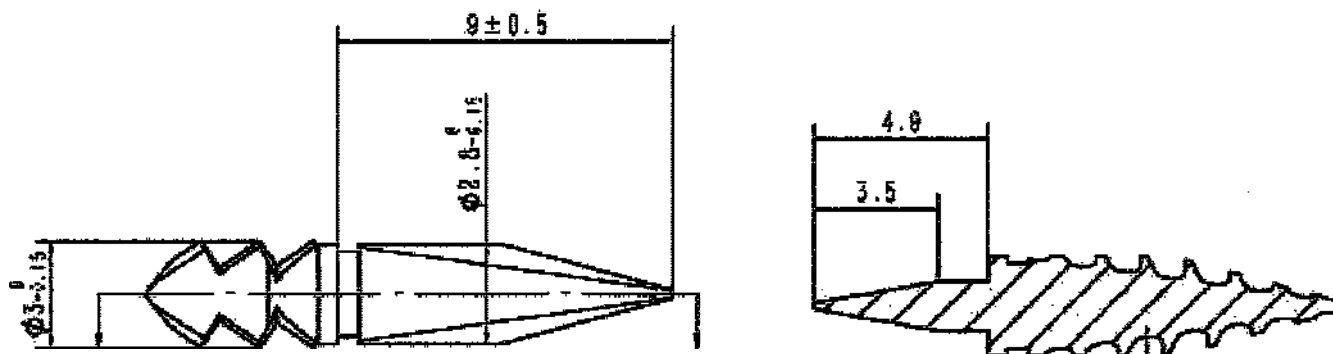


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Масса с погрешностями, г ±	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, not more
2,8 ⁰ _{-0,15}	9±0,5	4,9±0,25 3,5±0,25	3 ⁰ _{-0,15}	T=0.17±20% S=0.3±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 2.0 X 13 мм, угол: 0°/ Screw Fixation for Hammertoe НАQ 06, size: 2.0 X 13 mm, angle: 0°

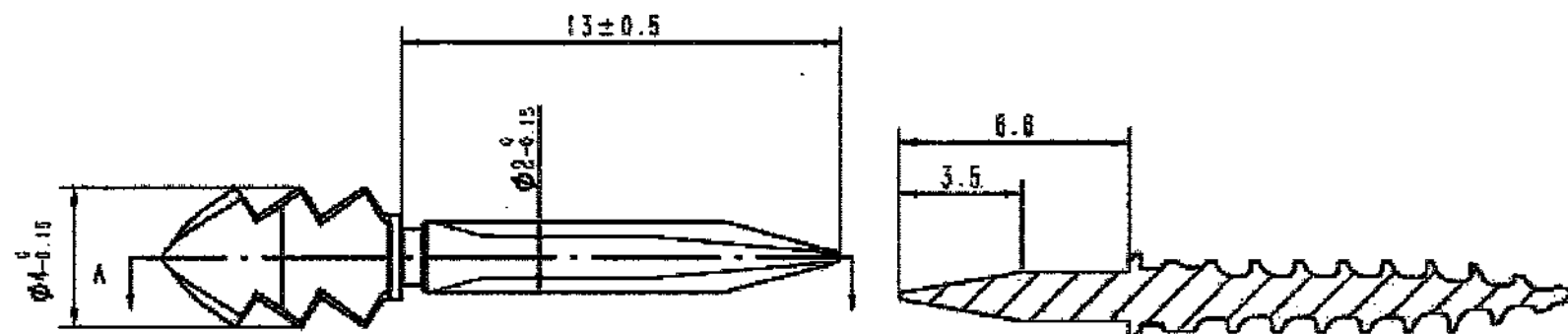


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
$2^{0}_{-0,15}$	$13 \pm 0,5$	$6,6 \pm 0,25$ $3,5 \pm 0,25$	$4^{0}_{-0,15}$	$T=0.10 \pm 20\%$ $S=0.18 \pm 20\%$	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги HAQ 06, размер 2,4 X 16 мм, угол: 0° / Screw Fixation for Hammertoe HAQ 06, size: 2,4 X 16 mm, angle: 0°

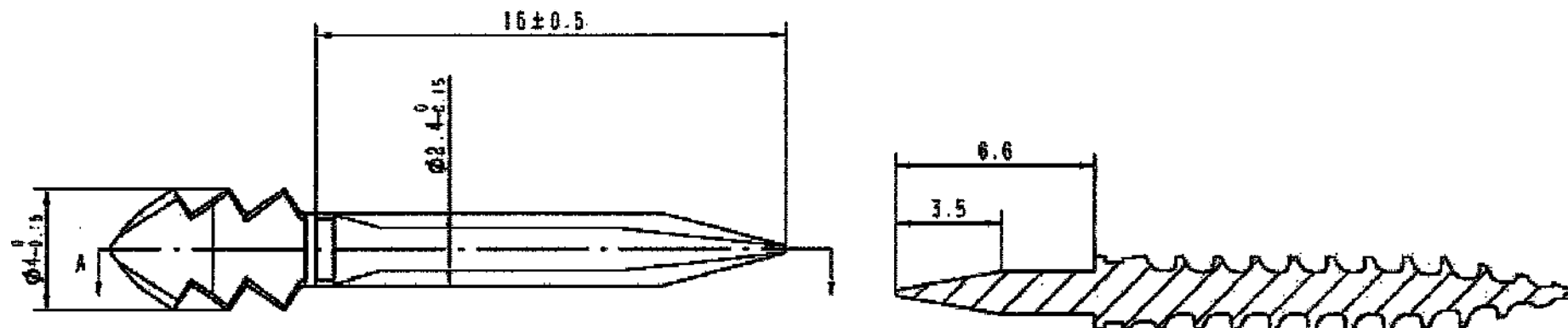


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, not more
2,4 ⁰ _{-0,15}	16±0,5	6,6±0,25 3,5±0,25	4 ⁰ _{-0,15}	T=0.2±20% S=0.36±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 3.2 X 16 мм, угол: 0° / Screw Fixation for Hammertoe НАQ 06, size: 3.2 X 16 мм, angle: 0°

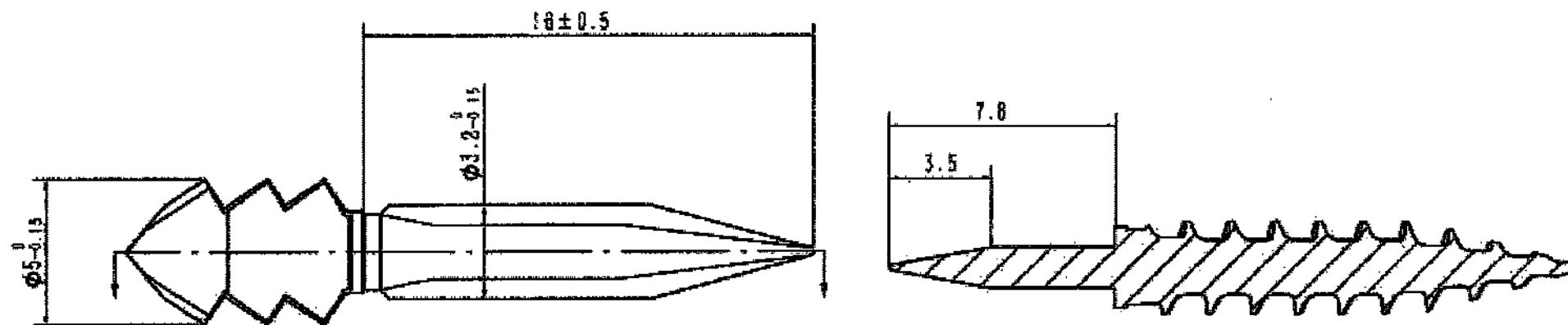


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
3,2 ⁰ _{-0,15}	16±0,5	7,8±0,25 3,5±0,25	5 ⁰ _{-0,15}	T=0.35±20% S=0.63±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 4.0 X 16 мм, угол: 0° / Screw Fixation for Hammertoe
 НАQ 06, size: 4.0 X 16 мм, angle: 0°

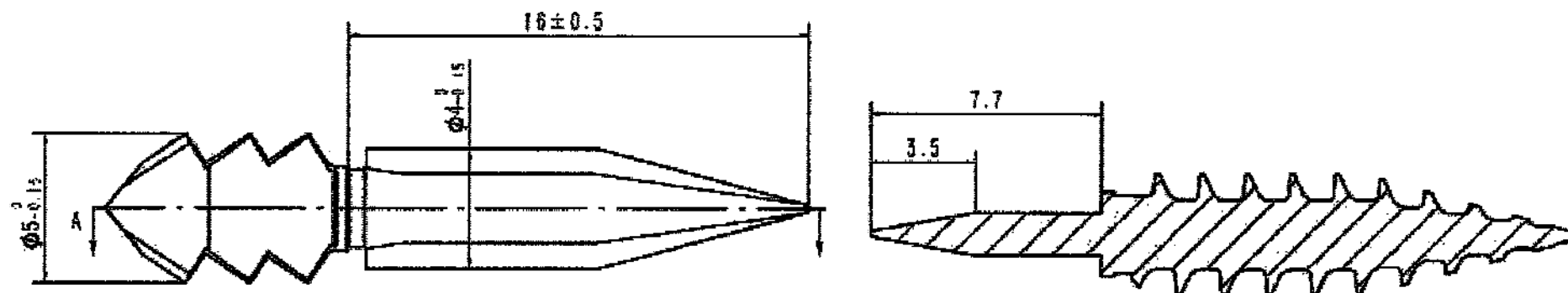


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Масса с погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
$4^{0}_{-0,15}$	16±0,5	7,7±0,25 3,5±0,25	$5^{0}_{-0,15}$	T=0.64±20% S=1.16±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 2.8 X 9 мм, угол: 10° / Screw Fixation for Hammertoe НАQ 06, size: 2.8 X 9 мм, angle: 10°

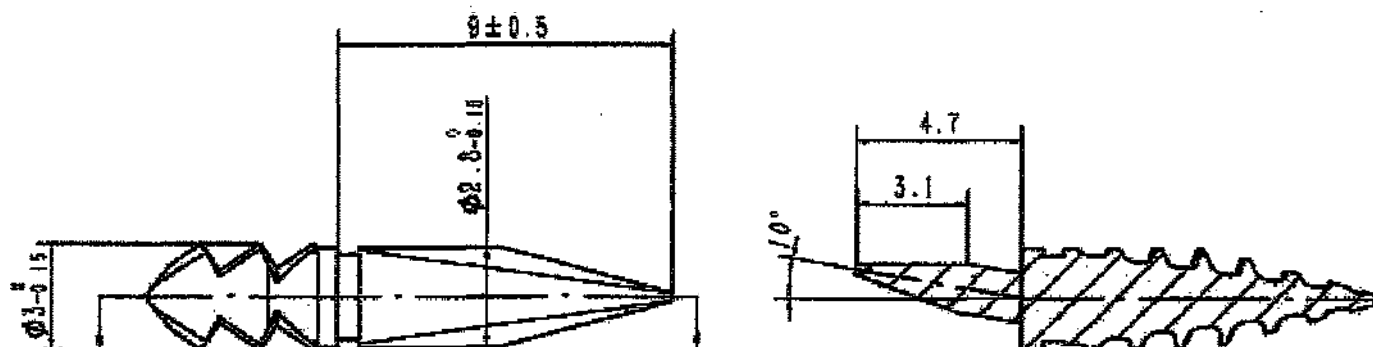


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Угол, °	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Angel, °	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
2,8 ⁰ _{-0,15}	9±0,5	4,7±0,25 3,1±0,25	3 ⁰ _{-0,15}	10	T=0.17±20% S=0.3±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 2.0 X 13 мм, угол: 10°/ Screw Fixation for Hammertoe НАQ 06, size: 2.0 X 13 mm, angle: 10°

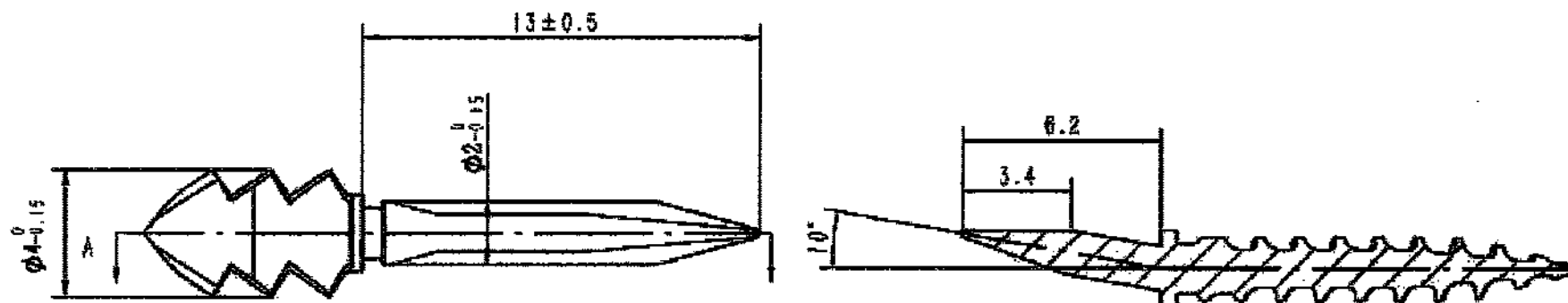


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Угол, °	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Angle, °	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, µm, not more
2 ⁰ _{-0,15}	13±0,5	6,2±0,25 3,4±0,25	4 ⁰ _{-0,15}	10	T=0.10±20% S=0.18±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 2,4 X 16 мм, угол: 10° / Screw Fixation for Hammertoe НАQ 06, size: 2,4 X 16 мм, angle: 10°

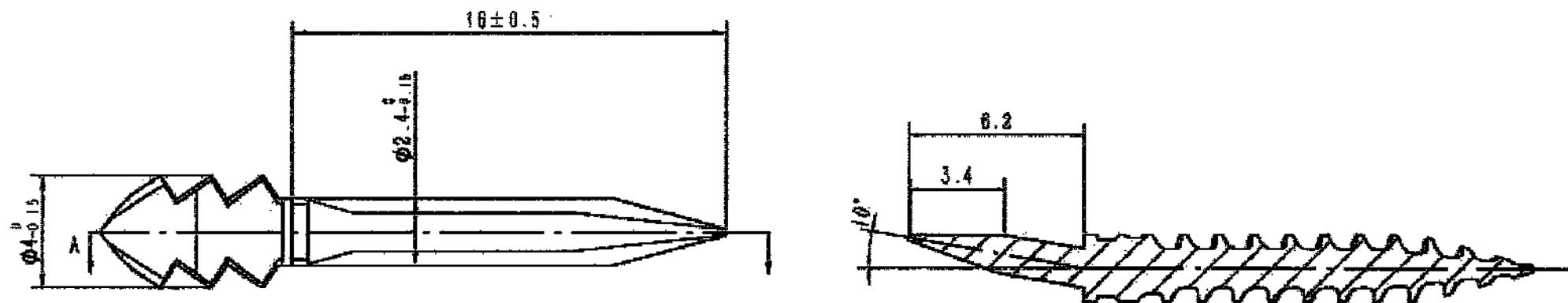


Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Угол, °	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Angel, °	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
2,4 ⁰ _{-0,15}	16±0,5	6,2±0,25 3,4±0,25	4 ⁰ _{-0,15}	10	T=0.2±20% S=0.36±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 3.2 X 16 мм, угол: 10° / Screw Fixation for Hammertoe НАQ 06, size: 3.2 X 16 mm, angle: 10°

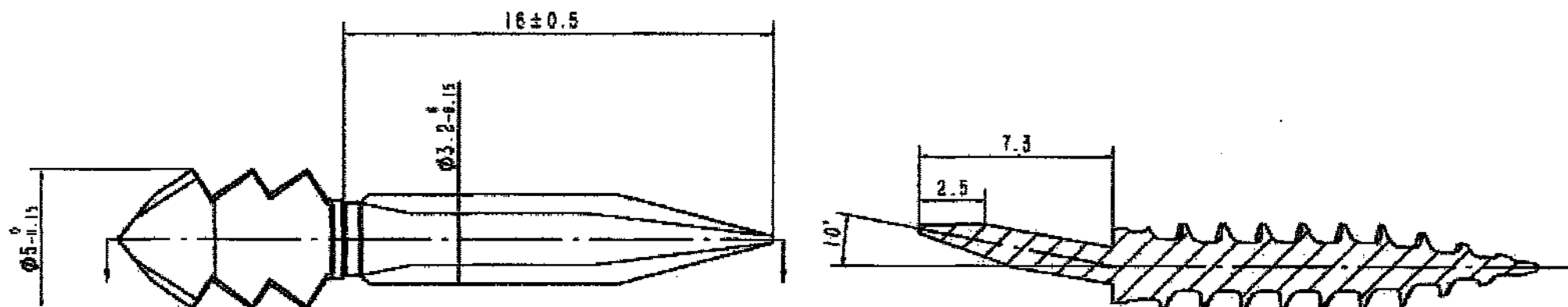

Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Угол, °	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Angle, °	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
3,2 ⁰ _{-0,15}	16±0,5	7,3±0,25 2,5±0,25	5 ⁰ _{-0,15}	10	T=0.35±20% S=0.63±20%	0,8 1,6 3,2

Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 4.0 X 16 мм, угол: 10° / Screw Fixation for Hammertoe NAQ 06, size: 4.0 X 16 mm, angle: 10°

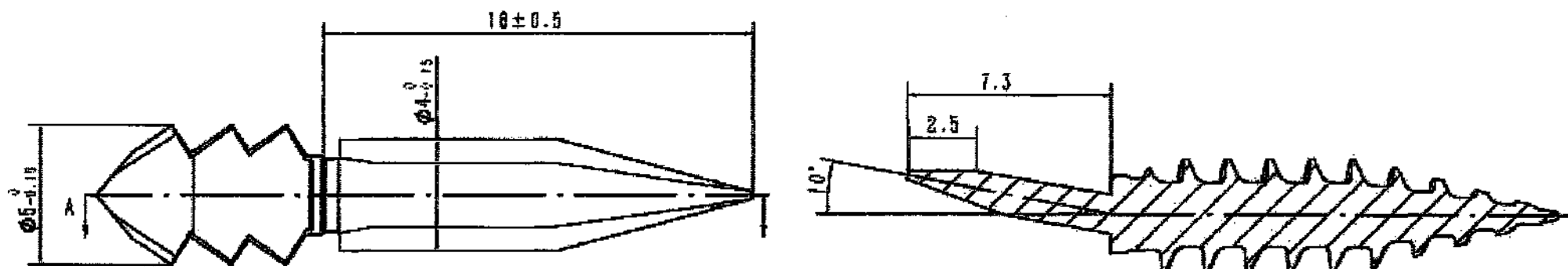

Макс. диаметр резьбы, мм	Длина резьбы, мм	Длина, мм	Макс. диаметр, мм	Угол, °	Масса погрешностями, г ± г	Шероховатость, мкм, не более
Max Diameter thread, mm	Length thread, mm	Length, mm	Max diameter, mm	Angle, °	Mass with tolerances, g ± g	Roughness, μm, not more
4 ⁰ _{-0,15}	16±0,5	7,3±0,25 2,5±0,25	5 ⁰ _{-0,15}	10	T=0.64±20% S=1.16±20%	0,8 1,6 3,2

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МИ				LIST AND DESCRIPTION OF MD MATERIALS			
Пластины изготавливаются из нелегированного титана в соответствии с требованиями стандарта ISO 5832-2:2018/ASTM F-67-13, и нержавеющей стали в соответствии с требованиями стандарта ISO 5832-1:2016/ASTM F138-13. Винты, торцевые заглушки, шайбы, болты и скобы изготовлены из титанового сплава, соответствующего требованиям стандарта ISO 5832-3:2016/ASTM F136-13, и нержавеющей стали, соответствующей требованиям стандарта ISO 5832-1:2016/ASTM F138-13. Ниже приведен материал сырья, который используется при производстве имплантатов для интрамедуллярного остеосинтеза Madison Ortho:				The plates are made up of unalloyed titanium which meets the requirements of ISO 5832-2:2018/ASTM F-67-13 and stainless steel which meets the requirements of ISO 5832-1:2016/ASTM F138-13. The screws, end caps, washers, bolts and staples are made up of titanium alloy which meets the requirements of ISO 5832-3:2016/ASTM F136-13 and stainless steel which meets the requirements of ISO 5832-1:2016/ASTM F138-13. Raw Materials used in manufacturing of implants for intermedullary osteosynthesis Madison Ortho are listed below:			
№ п/п	Материалы	Марка материала	Производитель материала	Sr. No.	Materials	Mark	Manufacturer
1	Нержавеющая сталь	00Cr18Ni14Mo3	Shanghai Sukang Medical Special Metal Material Co., Ltd.	1	Stainless Steel	00Cr18Ni14Mo3	Shanghai Sukang Medical Special Metal Material Co., Ltd.
2	Нелегированный титан	TA3	BAOJI HAODE TITANIUM CO., LTD.	2	Unalloyed Titanium	TA3	BAOJI HAODE TITANIUM CO., LTD.
3	Титановый сплав	Ti-6Al-4V	BAOJI HAODE TITANIUM CO., LTD.	3	Titanium Alloy	Ti-6Al-4V	BAOJI HAODE TITANIUM CO., LTD.

Таблица 1 - Значения символов, которые могут быть указаны на маркировке

	Номер по каталогу
	Код партии
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Не стерильно
	Не использовать повторно
	Европейское соответствие
	Знак соответствия в России

Table 1 - Interpretation of symbols used on the package

	Catalogue number
	Batch code
	Read the instruction manual carefully before using
	Date of manufacture
	Non sterile
	Single use
	European Conformity
	Symbol of conformity in Russia

Срок годности, срок службы

Производитель не проводил исследования стабильности для определения срока хранения/срока годности нестерильных имплантатов, поскольку имплантаты состоят из стабильных материалов, таких как нержавеющая сталь и титановый сплав, и будут поставляться в нестерильном виде.

Форма поставки

Shelf life, use by date

The manufacturer has not conducted the stability study to determine the shelf life/expiry date of non sterile implants. Because, implants are made up of stable materials such as Stainless Steel and Titanium Alloy, and these implants will be supplied non-sterile.

How supplied

Имплантаты поставляются в нестерильном виде и подлежат обязательной стерилизации перед использованием. Количество изделий в упаковке указано на этикетке. Инструкция поставляется вместе с изделием.	Implants are supplied in non-sterile form and must be sterilized prior to use. The number of products in the package is indicated on the label. The IFU is supplied with the Device.
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Неприменимо. Данное медицинское изделие не содержит материалы животного и (или) человеческого происхождения	LIST OF MATERIALS OF ANIMAL AND (OR) HUMAN ORIGIN Not applicable. This medical device does not contain materials of animal and / or human origin.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ, ПРОТОКОЛАХ ИСПЫТАНИЙ, АНАЛИЗЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ Имплантаты выдержали испытания по верификации и валидации и удовлетворяют требованиям следующих стандартов:	INFORMATION ON THE TESTS CARRIED OUT, TEST REPORTS, ANALYSIS OF THE OBTAINED DATA The implants have passed the verification and validation tests and meet the requirements of the following standards:

Применяемый стандарт	Описание	Applied Standard	Description
EN 980	Медицинские приборы. Графические символы, используемые при маркировке медицинских устройств	EN 980	Symbols for use in the labelling of medical devices
EN 1041	Информация предоставляемая производителем медицинских изделий	EN 1041	Information supplied by the manufacturer of medical devices
ISO 5832-1	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 1. Кованая нержавеющая сталь	ISO 5832-1	Implants for surgery - Metallic materials - Part 1: Wrought stainless steel
ISO 5832-2	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 2: Нелегированный титан	ISO 5832-2	Implants for surgery - Metallic materials -- Part 2: Unalloyed titanium
ISO 5832-3	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый титан 6-алюминий 4-ванадиевый сплав	ISO 5832-3	Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy
ISO 14630	Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования	ISO 14630	Non-active surgical implants - General requirements
ISO 14602	Неактивные хирургические имплантаты. Имплантаты для остеосинтеза. Технические требования	ISO 1460	Non-active surgical implants. Implants for osteosynthesis. Particular requirements
ISO 5836	Имплантаты для хирургии. Металлические пластинки для скрепления отломков кости. Отверстия под винты с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью	ISO 5836	Implants for surgery. Metal bone plates. Holes corresponding to screws with asymmetrical thread and spherical under-surface
ISO 9269	Имплантаты для хирургии. Металлические пластинки для скрепления обломков кости. Отверстия и пазы для винтов с коническими поверхностями головок	ISO 9269	Implants for surgery - Metal bone plates - Holes and slots corresponding to screws with conical under-surface
ISO 9585	Имплантаты для хирургии. Определение прочности и жесткости на изгиб металлических пластинок для скрепления отломков кости	ISO 9585	Implants for surgery. Determination of bending strength and stiffness of bone plates
EN ISO 10993-1	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 1: Оценка и проверяющий в процессе управления рисками	EN ISO 10993-1	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

Применяемый стандарт	Описание	Applied Standard	Description
EN ISO 10993-5	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Испытания на цитотоксичность in vitro	EN ISO 10993-5	Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
EN ISO 10993-10	Биологическая оценка медицинских устройств — Часть 10: Анализы на раздражение и сенсибилизацию кожи	EN ISO 10993-10	Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for irritation and skin sensitization
ISO 11607-2	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки	ISO 11607-2	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes
ISO 11737-1	Стерилизация продуктов здравоохранения - микробиологические Методы - Часть 1: Определение популяции микроорганизмов на продукции	ISO 11737-1	Sterilisation des produits de sante - Methodes microbiologiques - Partie 1 : Determination d'une population de microorganismes sur des produits
ISO 13485	Требования Системы менеджмента качества медицинских устройств в регулирующих целях	ISO 13485	Medical devices Quality management systems Requirements for regulatory purposes
EN ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	EN ISO 14971	Medical devices. Application of risk management to medical devices
ISO 15223-1	Медицинские устройства – Символы, которые будут использоваться с метками медицинского устройства, маркировкой и информацией, которая будет поставляться – Часть 1: Общие требования	ISO 15223-1	Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements
ISO 14644-1	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1	ISO 14644-1	Cleanrooms and associated controlled environments. Part 2. Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МИ		MD SAFETY AND EFFECTIVENESS REQUIREMENTS	
Специальное примечание		Special note	

Материалы для каждого компонента изделия указаны на этикетке. Рекомендуется совместно использовать компоненты, изготовленные из одного материала. Различные типы металлов не должны использоваться вместе. Используйте только винты из нержавеющей стали с изделиями из нержавеющей стали, и титановые винты с изделиями из титана. Запрещается совместное использование компонентов разных производителей, кроме случаев, когда это рекомендовано самим производителем.

Все имплантируемые компоненты предназначены только для одноразового использования. Не для повторного использования. Производитель не несет ответственности, при возникновении каких-либо побочных реакций из-за вторичного использования изделий.

Изделия предоставляются в различных формах и размерах, изготовлены из нержавеющей стали и титана. Данные изделия используются только в качестве вспомогательного средства при лечении; не являются заменой нормальной неповрежденной ткани или кости. Анатомия человеческих костей имеет ограничения в отношении размера или толщины имплантатов и, следовательно, их прочность ограничена. Полноценная нагрузка до полного заживления кости противопоказана. При повторной нагрузке у пациентов с отсроченным заживлением или отсутствием сращения происходит изгибание, поломка или смещение имплантата.

Предупреждения и требования безопасности

Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho состоят из различных пластин и винтов. Пластины изготавливаются из нелегированного титана и нержавеющей стали. Винты изготавливаются из титанового сплава и нержавеющей стали. Общепринятые предупреждения для этих изделий представлены ниже.

1. Хотя хирург является обученным посредником между компанией и пациентом, важная информация, представленная в этом документе, должна быть передана пациенту. Пациент должен быть предупрежден об использовании, ограничениях и возможных неблагоприятных воздействиях этих имплантатов,

The component material is provided on the label. Use the components made up of the same material together. Different metal types should not be used together. Use only Stainless Steel Screws with Stainless Steel Devices and Titanium Screws with Titanium Devices. Components from different Manufacturers must not be mixed, except when advised by the manufacturer.

All implantable components are designed for Single use only. Not to be reused. The manufacturer is not responsible if any adverse reactions occur due to secondary use.

The devices are available in many shape and sizes and are made from stainless steel and titanium materials. These are used only as an aid to healing; they are not a substitute for normal intact tissue or bone. The anatomy of human bones presents limitations with respect to the size or thickness of implants and thus its strength is limited. Full weight bearing prior to complete bone healing is contraindicated. With repeated stress in patients with delayed healing or nonunion, the appliance will inevitably bend, break or pull out of bone.

Warnings and safety requirements

Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho consist of various plates and screws. Plates are made up of unalloyed Titanium and Stainless steel. Screws are made up of Titanium alloy and Stainless steel. Warnings are common for these devices and listed below.

1. Although the surgeon is the learned intermediary between the company and the patient, the important information conveyed in this document should be conveyed to the patient. The patient must be cautioned about the use, limitations and possible adverse effects of these implants including the potential for these devices failing as a result of loose fixation and/or

включая вероятность неисправности этих изделий в результате слабой фиксации и/или ослабления, нагрузки, чрезмерной активности, воздействия повышенных нагрузок по причине замедленного сращения (консолидации перелома), несращения или неполноценного исцеления. Пациент должен быть предупрежден о том, что несоблюдение инструкций по послеоперационному уходу может привести к неисправности имплантата или неудачному лечению.

2. При применении на пациентах детского возраста избегайте размещения пластины на несросшейся растущей кости.
3. Импантаты не выдерживают полных нагрузок на ногу. До образования прочного костного сращения пациенту следует использовать приемлемые средства для внешней поддержки и ограничивать физические нагрузки, которые могут нагружать имплантат или привести к движению в месте перелома, поскольку это приведет к задержке выздоровления. Отсутствие иммобилизации (обездвиживания) замедленного сращения или несращения кости приведет к чрезмерным и повторным нагрузкам, которые передаются организмом на любое изделие временной внутрикостной фиксации до сращения перелома. Из-за обычной усталости металла эти нагрузки могут привести к возможному изгибу или поломке изделия. Поэтому важно, чтобы иммобилизация места перелома сохранялась до тех пор, пока не образуется прочное костное сращение (подтвержденное клиническим и рентгенологическим исследованием). При использовании изделия временной внутрикостной фиксации для лечения подвертельных или межвертельных переломов необходимы особые меры предосторожности. Такие переломы сложнее лечить, поскольку они приводят к необычно сильным дисбалансам мышечных усилий, что оказывает большую нагрузку на изделие временной внутрикостной фиксации, чем при других типах переломов бедренной кости. Эти нагрузки повышают вероятность изгиба или поломки имплантата.

loosening, stress, excessive activity, load bearing particularly when the implants experience increased loads due to a delayed union, nonunion, or incomplete healing. The patient must be warned that failure to follow postoperative care instructions may cause the implant or treatment to fail.

2. When indicated for pediatric patients, avoid placing the plate over an unfused growth bone.
3. Implants cannot be expected to withstand the unsupported stresses of full weight bearing. Until firm bone union is achieved, the patient should employ adequate external support and restrict physical activities which would place stress upon the implant or allow movement at the fracture site and delay healing. Failure to immobilize a delayed union or nonunion of bone will result in excessive and repeated stresses which are transmitted by the body to any temporary internal fixation device prior to the healing of the fracture. Due to normal metal fatigue, these stresses can cause eventual bending or breakage of the device. Therefore, it is important that immobilization of the fracture site is maintained until firm body union (confirmed by clinical and roentgenographic examination) is established. Special precautions are necessary if temporary internal fixation device is used to treat an unstable intertrochanteric fracture of a subtrochanteric fracture. These fractures are more difficult to reduce and result in unusually strong unbalances muscle forces which cause greater stress to be transmitted to the temporary internal fixation device than with other types of femoral fractures. These stresses increase the possibility of implant bending or breakage.
4. Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho are designed for single use only and must never be reused. The manufacturer is not responsible if any adverse reactions occur due to secondary use.
5. Implants are not approved for screw attachment or fixation to the posterior elements (pedicles) of the cervical, thoracic, or lumbar spine.

- | | |
|--|---|
| <p>4. Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho предназначены только для однократного применения и ни в коем случае не должны использоваться повторно. Производитель не несет никакой ответственности за какое-либо неблагоприятное воздействие изделия при его повторном использовании.</p> <p>5. Имплантаты не предназначены для винтового крепления или фиксации к ножкам шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника.</p> <p>6. Из-за несбалансированных мышечных усилий подвздошные переломы и остеотомии создают критические нагрузки на имплантаты, что существенно снижает вероятность заживления перелома и приводит к изгибу или поломке компонентов имплантата. Для увеличения стабильности перелома и минимизации внутренних нагрузок на имплантат и сломанную кость необходимо применить дополнительные меры предосторожности и внешние или внутренние средства поддержки, пока не образуется (и не будет подтверждено на рентгенограмме) прочное костное сращение.</p> <p>7. Используйте только стерильные изделия в операционной области.</p> <p>8. Хирургические имплантаты и инструменты производителя запрещается использовать совместно с компонентами от других производителей.</p> <p>9. Чрезвычайно важным является правильное обращение с имплантатом. Избегайте контурования металлических имплантатов, если только это не предусмотрено конструкцией. При выполнении контурирования изделие нельзя резко сгибать, надрезать или царапать. Все эти операции могут привести к дефектам поверхности и внутренней концентрации напряжения, что может стать причиной будущей неисправности изделия.</p> <p>10. Послеоперационный уход чрезвычайно важен. Пациент должен быть предупрежден о том, что несоблюдение инструкций по послеоперационному уходу может привести к поломке</p> | <p>6. Because of unbalanced muscle forces, subtrochanteric fractures and osteotomies place extreme loads on implants, substantially reducing the chance of fracture healing with bending or breaking implant components. Additional precautions and internal or external supports should be utilized to enhance the stability of the fracture and to minimize internal stress loading of the implant and broken bone until solid bony union is evident by radiograph.</p> <p>7. Use only sterile products in the operative field.</p> <p>8. The manufacturer surgical implant and instruments should not be used with components from other manufacturers</p> <p>9. Correct handling of the implant is extremely important. Avoid contouring metallic implants unless allowed by design. When contouring, the device should not be sharply, reverse bent, notched or scratched. All of these operations can produce defects in the surface finish and internal stress concentrations, which may become the focal point for eventual failure of the appliance.</p> <p>10. Postoperative care is extremely important. The patient must be warned that noncompliance with postoperative instruction could lead to breakage of the implant requiring revision surgery to remove the device. Patients must strictly abide by the surgeon's advice, scheduled postoperative follow-up examinations, and keep records.</p> |
|--|---|

имплантата, требующей ревизионной операции по удалению изделия. Пациенты должны строго соблюдать рекомендации хирурга, проходить назначенные послеоперационные осмотры и вести записи.	
Меры предосторожности 1. Производитель не рекомендует никаких определенных хирургических процедур для конкретного пациента. Именно оперирующий хирург несет исключительную ответственность за выбор подходящего имплантата для каждого конкретного случая. Ответственность за последующее лечение, а также решение о сохранении либо извлечении имплантата, ложится на пользователя. 2. Лечащий врач должен тщательно ознакомиться с процедурой имплантации заранее, например: – Внимательно изучить всю документацию изделия. – Осуществить тщательный обзор актуальной профессиональной литературы. – Проконсультироваться с коллегами с опытом работы в данной области с применением подобной системы. – Иметь опыт работы с системой имплантации и хирургическую практику. 3. Имплантаты являются общепринятым средством, предназначенным для временного нахождения в теле с их последующим удалением после достижения достаточного (костного) заживления. 4. Имплантация имплантатов для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho должна проводиться опытным врачом-травматологом, обладающим соответствующей квалификацией, поскольку это технически сложная процедура, представляющая риск серьезного травмирования пациента. 5. Для установки данной системы должны быть отобраны только те пациенты, которые соответствуют критериям, представленным в списке показаний к применению.	Precautions 1. The manufacturer does not recommend a specific surgical procedure for a specific patient. The operating surgeon is solely responsible for choosing the appropriate implant for the specific case. The follow-up treatment as well as the decision of whether to retain or explant the implant is the responsibility of the user. 2. The treating physician should beforehand become thoroughly familiarized with the procedure, for example: – Carefully studying all the product documentation. – Carefully reviewing the current professional literature. – Consulting with colleagues experienced in this field and with the use of this system. – Practice in handling the system and practice of the surgical procedure 3. Implants are generally designed to remain in the body temporarily and be removed after sufficient (osseous) healing has taken place. 4. The implantation of implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho must be done by experienced traumatic physician who hold relevant qualifications, because this is a technically demanding procedure presenting a risk of serious injury to the patient. 5. Only patients that meet the criteria described in the indications should be selected. 6. Patient conditions and/or predispositions such as those addressed in the aforementioned contraindications should be avoided. 7. The type of construct to be assembled for the case should be determined prior to beginning the surgery. An adequate

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Следует избегать состояний и/или предрасположенностей пациента, таких как указанные в вышеупомянутом списке противопоказаний. 7. Необходимый тип конструкции, требуемый в конкретном случае, должен быть определен до начала операции. Во время операции в наличии должен находиться достаточный ассортимент размеров имплантатов, включая размеры, больше и меньше тех, которые предполагается использовать. 8. Различные типы металлов не должны использоваться вместе. Изделия должны быть изготовлены из металла с аналогичным составом, чтобы предотвратить возможность гальванической коррозии или других металлических реакций, если только производитель не рекомендует использовать их вместе. Все компоненты имплантатов были разработаны и изготовлены для определенной цели и поэтому они специально адаптированы для совместного применения. Пользователь не может изменять какие-либо компоненты или заменять их инструментом или изделием другого производителя, даже если размер или форма являются аналогичными, либо они точно соответствуют оригинальному изделию. Используемые материалы других производителей, структурные изменения, возникшие в результате использования сторонних продуктов и/или сырьевых примесей, а также незначительные отклонения или неаккуратное соединение между имплантатом и инструментом и т. п. могут представлять риск для пользователя, пациента или третьих сторон. 9. Соблюдайте осторожность при сгибании фрагментов пластин, чтобы избежать их ослабления или разрушения. 10. Используйте рентгеноскопию для предотвращения непреднамеренного проникновения в субхондральную кость. 11. Дистальный конец винтов должен располагаться на 3-6 мм ниже субхондральной пластинки. При необходимости положение следует отрегулировать. | <ol style="list-style-type: none"> inventory of implant sizes should be available at the time of surgery, including sizes larger and smaller than those expected to be used. 8. Different metal types should not be used together. The devices should be manufactured from a metal that has a similar composition to avert the possibility of galvanic corrosion or other metallic reactions, unless directed to be used together by manufacturer. All of the implants components have been developed and manufactured for a specific purpose and are therefore precisely adapted to each other. The user may not alter any of the components or replace them with an instrument or product from another manufacturer even if the size or shape is similar or exactly corresponds to that of the original product. Utilizing materials from other manufacturers or structural changes resulting from the use of third-party products also material impurities and minor deviations or imprecise fit between the implant and instrument can represent a risk to the patient. 9. Exercise care when bending the fragment plates to avoid weakening or fracture of the plates. 10. Use fluoroscopy to prevent unintentional penetration of subchondral bone. 11. The distal end of the screws should be 3-6 mm below the subchondral plate. Readjust as necessary. 12. Do NOT permanently implant Kirschner wires through the holes of the plate because they may back out and cause tissue damage. Use of the K-Wires allows you to provisionally secure the plates to the anatomy. 13. Supply a sufficient amount of torque to the screws to ensure that each is fully seated. If not seated properly, remove, re-drill and reinsert the screw until fully seated. The head of the screw should sit beneath the surface of the plate to avoid soft tissue irritation. |
|---|---|

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перманентная имплантация спиц Киршнера через отверстия в пластине, так как они могут сместиться и повредить ткани. Использование спиц Киршнера позволяет предварительно закрепить пластины в теле. 13. Тщательно закрутите винты, чтобы убедиться в достаточности их фиксации. Если винты не были установлены должным образом, удалите их, повторно просверлите отверстие и снова вставьте винт, чтобы достичь полной фиксации. Головка винта должна находиться ниже поверхности пластины, чтобы избежать раздражения мягких тканей.	
ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ: Показания к операции и выбор имплантатов должны учитывать определенные важные критерии, такие как: 1. Лечащий врач должен подробно проинструктировать пациентов об эксплуатационных ограничениях имплантатов. Использование каталога и хирургических техник изделия позволят узнать все типы и размеры имплантата, необходимые для имплантации и соответствующие инструменты. 2. Процедура не может восстановить функциональность тела до уровня здоровой кости, и у пациента не должно быть нереалистичных ожиданий относительно восстановления.	PREOPERATIVE NOTICES: The surgical indication and the choice of implants must take into account certain important criteria such as: 1. Physician must instruct patients in detail about the limitations of the implants. The use of the catalog and surgical techniques of the product will allow to know all the types and sizes of the implant necessary to implant and the appropriate instruments. 2. The procedure will not restore function to the level excepted with normal healthy bones, and the patient should not have unrealistic functional expectations.
ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ: Пластина подходящего размера размещается таким образом, чтобы отверстия для винтов охватывали место перелома или остеотомии, в то же время позволяя расположить отверстия для винтов над этим местом. Пластина должна быть прикреплена к кости с помощью винтов с обеих сторон. Обратите внимание, что пластины с центральными отверстиями могут быть размещены с любой стороны места перелома. При создании отверстий для вставляемого винта необходимо использовать сверло подходящего размера и направляющую втулку. Для установки необходимого угла сверления следует использовать блокирующие направляющие сверла. Винты вставляются осторожно, так, чтобы резьбовая часть винта не охватывала поверхность отдела имплантата/кости или поверхности	INTRAOPERATIVE NOTICES: An appropriately sized plate is placed such that the screw holes span the fracture or osteotomy site while it is okay to have some screw holes positioned over that site. The plate should be fixed to the bone via screws on both sides. Note that when using plates with center holes, they may be placed on either side of the fracture site. The correctly sized drill bit and guide sleeve are utilized to produce holes for the screw to be inserted. Locking drill guides must be used when inserting a locking screw so that the drill angle is correct. Screws are inserted with care to ensure that the threaded portion of the screw does not span the implant/bone interface or a fracture surface. Additionally, when used in this

перелома. Кроме того, при использовании в этом приложении головки винтов должны быть полностью закреплены в углублении пластины после их затягивания.

Ознакомьтесь с техникой проведения хирургических манипуляций определенных процедур.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Послеоперационные рекомендации лечащего врача, предупреждение пациента о проведении необходимых мероприятий, и соответствующее соблюдение рекомендаций пациентом являются чрезвычайно важным фактором лечения.

- Чтобы обеспечить максимальные шансы для достижения успешного хирургического результата, пациент или медицинское изделие не должны подвергаться механическим вибрациям, которые могут ослабить конструкцию имплантата. Пациенты должны быть предупреждены об этом, и проинструктированы о таких ограничениях и о необходимости в снижении физической нагрузки, в частности избегать подъемных и скручивающих движений, исключить любые виды спорта. Пациенту рекомендуется исключить курение и употребление алкоголя в период заживления костного трансплантата.
- Пациент должен быть проинформирован о своей неспособности совершать наклоны и сгибания в точке сращения перелома, пройти соответствующий инструктаж по компенсации данного постоянного физического ограничения в движении тела.
- Лечащий врач должен сообщить пациенту о необходимости уведомлять о любых необычных изменениях в месте операции своему врачу. Лечащий врач должен внимательно следить за пациентом, если на месте установки трансплантата было обнаружено изменение.

При возникновении несращения или ослабления компонентов имплантата, его изгибания и/или поломки, изделие(я) нужно проверить непосредственно до того, как случится серьезная травма. Невозможность иммобилизовать участок задержки сращения или несращенную кость приведет к возникновению чрезмерных

application, the screw heads must be fully seated into the recess of the plate when tightened.

Refer the surgical technique for specific surgical procedures.

POSTOPERATIVE NOTICES:

The physician's postoperative directions and warnings to the patient and the corresponding patient compliance are extremely important.

- To allow the maximum chances for a successful surgical result: the patient or device should not be exposed to mechanical vibrations that may loosen the device construct. The patients should be warned of this possibility and instructed to limit and restrict physical activities, especially lifting and twisting motions and any type of sport participation. The patient should be advised not to smoke or consume alcohol during the bone graft healing process.
- The patient should be advised of their inability to bend at the point of the fracture fusion and taught to compensate for this permanent physical restriction in body motion.
- Physician must instruct patients to report any unusual changes of the operative site to his/her physician. The physician should closely monitor the patient if a change at the site has been detected.

If a non-union develops or if the components loosen, bend, and/or break, the device(s) should be revised immediately before serious injury occurs. Failure to immobilize a delayed or non-union of bone will result in excessive and repeated stresses on the implant. By the mechanism of fatigue these stresses can cause eventual bending, loosening or breakage of the device(s). It is important that immobilization of the surgical site be maintained until firm bony union is established and confirmed by roentgenographic examination. The patient must be

повторных нагрузок на имплантат. Согласно механизму износа, эти нагрузки могут привести к возможному изгибу, ослаблению или поломке изделия(ий). Важно, чтобы иммобилизация хирургического участка сохранялась до тех пор, пока не сформируется твердое костное соединение, подтвержденное рентгенологическим исследованием. Пациент должен быть надлежащим образом предупрежден об этих опасностях и находиться под тщательным наблюдением, чтобы обеспечить содействие упомянутых факторов до тех пор, пока не будет подтверждено прочное костное соединение.	adequately warned of these hazards and closely supervised to insure cooperation until bony union is confirmed.
ВЫБОР ИМПЛАНТАТА: Правильный выбор имплантата чрезвычайно важен. Возможность удовлетворительной фиксации увеличивается за счет выбора правильного размера, формы и конструкции имплантата. Размер пластин и винтов, которые будут использоваться, определяет анатомия пациента. Размер и форма анатомических особенностей пациента представляют собой ограничивающий фактор по размеру и прочности имплантатов. ВЫБОР ПАЦИЕНТА: – При оценке пациентов на применение ортопедических изделий для вероятного успеха процедуры имеет огромное значение вес пациента, род занятий, уровень активности и любые дегенеративные заболевания. Эти условия должны оцениваться как часть предоперационного планирования. Условия старения, психические заболевания, алкоголизм, злоупотребления табаком или наркотиками также должны быть приняты во внимание. – Окончательное решение о лечении принимается на усмотрение врача и пациента.	IMPLANT SELECTION: Correct selection of the implant is extremely important. The potential for satisfactory fixation is increased by the selection of the proper size, shape, and design of the implant. The patient's anatomy will determine the size of the plates and screws to be used. The size and shape of the anatomy presents limiting restrictions on the size and strength of the implants. PATIENT SELECTION: – When evaluating patients for orthopedic device application, the patient's weight, occupation, activity level and any degenerative diseases are of extreme importance to the eventual success of the procedure. These conditions must be evaluated as part of the preoperative planning. Conditions of senility, mental illness, alcoholism, tobacco, or drug abuse must also be taken into consideration. – Final treatment decision is at the discretion of the physician and patient.
УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА: Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho являются изделием временной внутренней фиксации. Изделия внутренней фиксации предназначены для стабилизации операционного участка во время нормального процесса заживления. После сращения перелома эти устройства не имеют	REMOVAL OF IMPLANT: Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho are temporary internal fixation devices. Internal fixation devices are designed to stabilize the operative site during the normal healing process. After the fracture is union, these devices serve no functional purpose and may be removed

функционального назначения и могут быть удалены, если есть признаки или показания локальной реакции ткани или боли, повреждения, сдвига, перелома или ослабления этих вспомогательных изделий, или инфекции или потери костной массы, то следует рассмотреть удаление. Любое решение врача удалить изделие должно учитывать такие факторы, как:

- Риск для пациента дополнительных хирургических процедур, а также сложность удаления.
 - Боль или необычные ощущения из-за наличия имплантатов.
 - Инфекция или воспалительные реакции.
 - Снижение плотности кости из-за различного распределения механических и физиологических нагрузок и деформаций.
- После удаления имплантата в кости может образоваться перелом.

Удаление имплантатов может иметь некоторые осложнения. Инфекции могут возникать при всех типах операций, и это можно увидеть в данной процедуре. Удаление имплантатов, которые находятся глубоко, может привести к повреждению нервов и сосудов, которые попадают в волокнистую ткань, образовавшуюся в процессе заживления. Принимаются все меры предосторожности, чтобы избежать этих осложнений. В некоторых случаях может быть трудно удалить имплантаты, и из-за этого от процедуры, возможно, придется отказаться, хотя это очень редкое явление.

Удаленные имплантаты должны обрабатываться в соответствии с местными правилами. После извлечения из пациента имплантат рекомендуется стерилизовать, используя валидированный метод обработки его как биологического остатка.

БЕЗОПАСНОСТЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ):

Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho не были оценены на безопасность и совместимость в

where there is evidence or indication of localized tissue reaction or pain, breakage, migration, fracture or loosening of these support devices, or infection or bone loss, then removal should be considered.

Any decision by a physician to remove the device should take into consideration such factors as:

The risk to the patient of the additional surgical procedures as well as the difficulty of removal.

- Pain or abnormal sensations due to the presence of the implants.
- Infection or inflammatory reactions.
- Reduction in bone density due to the different distribution of mechanical and physiological stresses and strains. The bone may get fracture after the removal of implant.

Removal of implants can have some complications. Infections can occur in all types of surgery, and can be seen in this procedure. Removal of implants, which are deep seated, can cause injury to the nerves and vessels, which get trapped in the fibrous tissue formed in the process of healing. Every precaution is taken to avoid these complications. On occasions implants can be difficult to remove and the procedure may have to be abandoned because of it, though this is very rare.

The removed implants should be treated according to the local regulations. It is recommended to sterilize the implant after being extracted from the patient, using a validated method proceeding to treat it as a biological residue.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) SAFETY:

Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho have not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. Fracture fixation

среде магнитного резонанса. Компоненты фиксации разрушения не были испытаны на нагрев или миграцию в среде МР.	components have not been tested for heating or migration in the MR environment.																								
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И (ИЛИ) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЯХ В СОСТАВЕ МИ Этот раздел не применим к данным изделиям, так как изделия не содержат лекарственных веществ и не используются в сочетании с лекарственными веществами.	INFORMATION ABOUT MEDICINES AND (OR) PHARMACEUTICAL SUBSTANCES INCLUDED IN MD This section is not applicable to the product as the devices do not contain medicinal substances and are not used in combination with medicinal substances.																								
ОПИСАНИЕ МЕТОДА СТЕРИЛИЗАЦИИ Все изделия поставляются нестерильными. Их необходимо стерилизовать перед использованием. Стерилизацию следует проводить в соответствии с утвержденной процедурой стерилизации паром. Перед стерилизацией удалите все упаковочные материалы, в операционной области должны находиться только стерильные изделия. Данные изделия рекомендуется стерилизовать паром в больнице с учетом следующих параметров:	DESCRIPTION OF STERILIZATION METHOD All the products are supplied non-sterile and must be sterilized prior to use. The sterilization has to be done according to a validated steam sterilization procedure. Remove all packaging materials prior to sterilization, only sterile products should be placed in the operative field. These products are recommended to be steam sterilized by hospital using the process parameters below:																								
<table border="1"> <tr> <th>Метод</th><th>Пар</th></tr> <tr> <td>Цикл</td><td>Принудительная вентиляция насыщенных паров</td></tr> <tr> <td>Температура</td><td>134°C (274°F)</td></tr> <tr> <td>Давление</td><td>30 фунт/дюйм²</td></tr> <tr> <td>Время контакта и высыхания</td><td>7 - 18 минут</td></tr> <tr> <td>Время высыхания</td><td>8 - 35 минут</td></tr> </table>	Метод	Пар	Цикл	Принудительная вентиляция насыщенных паров	Температура	134°C (274°F)	Давление	30 фунт/дюйм ²	Время контакта и высыхания	7 - 18 минут	Время высыхания	8 - 35 минут	<table border="1"> <tr> <th>Method</th><th>Steam</th></tr> <tr> <td>Cycle</td><td>Forced Ventilate Saturated Steam Out</td></tr> <tr> <td>Temperature</td><td>134°C (274°F)</td></tr> <tr> <td>Pressure</td><td>30 PSI</td></tr> <tr> <td>Contact and During Time</td><td>7 to 18 minutes</td></tr> <tr> <td>Dry Time</td><td>8 to 35 minutes</td></tr> </table>	Method	Steam	Cycle	Forced Ventilate Saturated Steam Out	Temperature	134°C (274°F)	Pressure	30 PSI	Contact and During Time	7 to 18 minutes	Dry Time	8 to 35 minutes
Метод	Пар																								
Цикл	Принудительная вентиляция насыщенных паров																								
Температура	134°C (274°F)																								
Давление	30 фунт/дюйм ²																								
Время контакта и высыхания	7 - 18 минут																								
Время высыхания	8 - 35 минут																								
Method	Steam																								
Cycle	Forced Ventilate Saturated Steam Out																								
Temperature	134°C (274°F)																								
Pressure	30 PSI																								
Contact and During Time	7 to 18 minutes																								
Dry Time	8 to 35 minutes																								
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МИ Имплантаты являются одноразовыми. Поэтому данный раздел по техническому обслуживанию и ремонту не применяется.	REQUIREMENTS FOR TECHNICAL SUPPORT AND REPAIR OF MD Implants are single use device. Therefore, this section of maintenance and repair is not applicable.																								
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ Таблица 2– Условия транспортировки	CONDITIONS OF TRANSPORTATION AND STORAGE Table 2– Transportation conditions																								

<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Диапазон</th></tr> <tr> <td>Температура</td><td>от 0 °C до +35 °C</td></tr> <tr> <td>Относительная влажность</td><td>до 80 %</td></tr> <tr> <td>Атмосферное давление</td><td>Не применимо</td></tr> </table> Таблица 3– Условия хранения <table> <tr> <th>Наименование</th><th>Диапазон</th></tr> <tr> <td>Температура</td><td>0 °C до +35 °C</td></tr> <tr> <td>Относительная влажность</td><td>до 80 %</td></tr> <tr> <td>Атмосферное давление</td><td>Не применимо</td></tr> </table>	Наименование	Диапазон	Температура	от 0 °C до +35 °C	Относительная влажность	до 80 %	Атмосферное давление	Не применимо	Наименование	Диапазон	Температура	0 °C до +35 °C	Относительная влажность	до 80 %	Атмосферное давление	Не применимо	<table> <tr> <th>Designation</th><th>Range</th></tr> <tr> <td>Temperature</td><td>0 °C to +35 °C</td></tr> <tr> <td>Relative humidity</td><td>to 80 %</td></tr> <tr> <td>Barometric pressure</td><td>Not applicable</td></tr> </table> Table 3– Storage conditions <table> <tr> <th>Designation</th><th>Range</th></tr> <tr> <td>Temperature</td><td>0 °C to +35 °C</td></tr> <tr> <td>Relative humidity</td><td>to 80 %</td></tr> <tr> <td>Barometric pressure</td><td>Not applicable</td></tr> </table>	Designation	Range	Temperature	0 °C to +35 °C	Relative humidity	to 80 %	Barometric pressure	Not applicable	Designation	Range	Temperature	0 °C to +35 °C	Relative humidity	to 80 %	Barometric pressure	Not applicable
Наименование	Диапазон																																
Температура	от 0 °C до +35 °C																																
Относительная влажность	до 80 %																																
Атмосферное давление	Не применимо																																
Наименование	Диапазон																																
Температура	0 °C до +35 °C																																
Относительная влажность	до 80 %																																
Атмосферное давление	Не применимо																																
Designation	Range																																
Temperature	0 °C to +35 °C																																
Relative humidity	to 80 %																																
Barometric pressure	Not applicable																																
Designation	Range																																
Temperature	0 °C to +35 °C																																
Relative humidity	to 80 %																																
Barometric pressure	Not applicable																																
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МИ	MD DISPOSAL RULES AND CONDITIONS																																
Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho являются изделием временной внутренней фиксации. Изделия для внутренней фиксации предназначены для стабилизации операционного участка во время нормального процесса заживления. После сращения перелома, данные изделия утрачивают свое функциональное значение и могут быть удалены. Если существуют доказательства или признаки локализованной реакции ткани или боли, поломки, разрыва, перелома или ослабления таких опорных изделий, инфекции или потери костной массы, в таком случае следует рассмотреть удаление данных изделий. Удаленные имплантаты должны утилизироваться в соответствии с местными правилами. Рекомендуется стерилизовать имплантат после его извлечения у пациента, используя утвержденный метод для обработки в качестве биологического остатка. Изделие относится к классу Б в соответствии с классификацией медицинских отходов.	Implants for fixation of a bone fracture with plates and screws Madison Ortho are temporary internal fixation devices. Internal fixation devices are designed to stabilize the operative site during the normal healing process. After the fracture is union, these devices serve no functional purpose and may be removed where there is evidence or indication of localized tissue reaction or pain, breakage, migration, fracture or loosening of these support devices, or infection or bone loss, then removal should be considered. The removed implants should be treated according to the local regulations. It is recommended to sterilize the implant after being extracted from the patient, using a validated method proceeding to treat it as a biological residue. The product belongs to class B of the classification of medical waste.																																
ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ	WARRANTY																																
Производитель гарантирует, что данное изделие соответствует спецификациям производителя и не имеет производственных дефектов на момент поставки. Данная гарантия специально исключает дефекты, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации, неправильного употребления или обращения с	The manufacturer warrants that this product meets the manufacturer's specifications and is free from manufacturing defect at the time of delivery. This warranty specifically excludes defects resulting from misuse, abuse, or improper handling of the product subsequent																																

изделием после его получения покупателем. Производитель не дает гарантий относительно результата проведенной хирургической операции.	to receipt by the purchaser. The manufacturer does not warrant the outcome of the surgical procedure
НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИК: МЭДИСОН ОРТО ИНК 1660 улица Санта-Ана, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико-00909 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: МЭДИСОН ОРТО ИНК 1660 улица Санта-Ана, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико-00909 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ЧАНЧЖОУ УЦИНЬ ЦЗИНЬСИНДА МЕДИКАЛ АППЛАЕНС КО., ЛТД., Индустриальный парк Уцзинь Вив, Хутанг, Уцзинь, 213162 Чанчжоу, Цзянсу, Китай УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ: ООО «СЦМП», 115191, г. Москва, Дербеневская набережная д. 7, с.2, эт. 3 комн. 15 оф. 313	NAME AND LEGAL ADDRESS OF MANUFACTURER AND AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN RUSSIAN FEDERATION DEVELOPER: MADISON ORTHO INC. 1660 Calle Santa Ana, San Juan, Puerto Rico-00909 MANUFACTURER: MADISON ORTHO INC. 1660 Calle Santa Ana, San Juan, Puerto Rico-00909 PLACE OF PRODUCTION: CHANGZHOU WUJIN JINXINGDA MEDICAL APPLIANCE CO., LTD., Wujin Weave Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, 213162 Changzhou, Jiangsu, China AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER IN RUSSIA: SCMP LLC 115191, Moscow, Derbenevskaya embankment 7, p. 2, FL. 3 room 15 office 313

Инструкции по применению выпускается впервые.
Год выпуска: 2020.

/подпись/
Жозеф Мукамал

Письменное свидетельство за подписью (аффидевит) № 1601
Подписано Жозефом Мукамала, Президентом компании «Мэдисон Орто Инк.»
которого я знаю лично.
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 30 июня 2020 г.

/подпись/

Печать-голограмма:

QR-код

ПОЛУЧЕНО

1U18-01720319

9397

30.06.2020

5,00 долларов США

Печать о предоставлении юридической помощи

80131-2020-0630-96292014

ПОЛУЧЕНО

/Печать/: Диего А. Мендельбаум Сегаль * Юрист/нотариус

Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.



Российская Федерация

Город Москва

Тридцатого июля две тысячи двадцатого года

Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Котлярова Антона Игоревича.


Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2020-27-2703

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

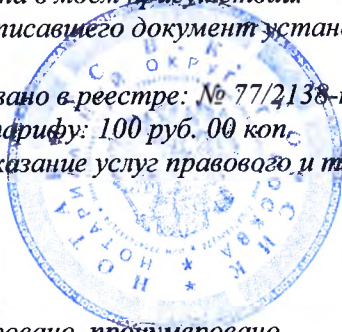

У.А. Родина

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 16 Лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

