

USER`S MANUAL

Product name: Orthodontic system regulated
in sets, in variants.

Applied Directive: Medical device directive (93/42/EEC)

Document No.: AUW-D3-UM-01


Revision date: 01/02/2021

Revision No.: 1.18 Rus

Manufacturer:

MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.
2F., NO.22, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD.,
SOUTHERN TAIWAN, SCIENCE PARK, XINSHI DIST. TAINAN CITY 741,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: / FAX: +886 6 505 3939 / +886-6-505-1212

Approved

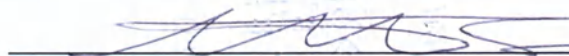 Signature
President: Tsung Che Wei

COMPANY PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

110年度南院民認字

案 號: 000217 日期: FEB 26 2021
Case No. Date

本文件 華鼎科技 股份有限公司 鑑定代理人 魏聰哲
之簽名或蓋章，在臺灣臺南地方法院所屬民間公證人
蔡宜珍事務所認證。 公證人: 蔡宜珍

Attested at the YI-CHEN TSAI Notary Public Office, Taiwan
Tainan District Court, R.O.C., that the signature(s)/seal(s) of

MEM Dental Technology Co., Ltd.

President: Tsung Che Wei
in this document is/are authentic.

Notary Public

YI-CHEN TSAI

address: No.207, Jhonghua 2nd Rd., Yongkang Dist., Tainan, Taiwan (R.O.C.)

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	34
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	36
5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	38
6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	39
7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	40
8. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	40
9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	43
10. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	44
11. РАСШИФРОВКА ПОЗИЦИЙ БРЕКЕТОВ*	74
12. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	75
13. МАТЕРИАЛЫ	75
14. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	76
15. ПРИМЕРЫ УПАКОВКИ	80
16. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	88
17. МАРКИРОВКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ	89
18. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	94
19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	94
20. СРОК ГОДНОСТИ	95
21. УТИЛИЗАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	95
22. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	96
23. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	97

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: «Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения». (далее по тексту: брекет-система, ортодонтические аппараты)

Производитель: MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. (MEM ДЕНТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.)

Адрес: 2F., NO.22, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., SOUTHERN TAIWAN, SCIENCE PARK, XINSHI DIST. TAINAN CITY 741, TAIWAN, R.O.C.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

«Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения»

Варианты исполнения:

I. Брекет-системы в наборах

1.1. Брекет керамический самолигирующий Genius C, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Genius C 0,022 UR1 (GCM1M11) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Genius C 0,022 UL1 (GCM1M21) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 3) Genius C 0,022 UR2 (GCM1M12) (верхний боковой правый резец) -10шт. в наборе
- 4) Genius C 0,022 UL2 (GCM1M22) (верхний боковой левый резец) -10шт. в наборе
- 5) Genius C 0,022 UR3 (GCM1M13H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 6) Genius C 0,022 UL3 (GCM1M23H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 7) Genius C 0,022 UR4/5 (GCM1M14H) (верхний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 8) Genius C 0,022 UL4/5 (GCM1M24H) (верхний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 9) Genius C 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) (GCM1M31) -10шт. в наборе
- 10) Genius C 0,022 LR3 (нижний правый клык) (GCM1M43H) -10шт. в наборе
- 11) Genius C 0,022 LL3 (нижний левый клык) (GCM1M33H) -10шт. в наборе
- 12) Genius C 0,022 LL4 (нижний левый первый премоляр) (GCM1M34H) -10шт. в наборе
- 13) Genius C 0,022 LL5 (нижний левый второй премоляр) (GCM1M35H) -10шт. в наборе
- 14) Genius C 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) (GCM1M44H) -10шт. в наборе
- 15) Genius C 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр) (GCM1M45H) -10шт. в наборе
- 16) Genius C 0,022 U 3*3 (GCM1MU3H) -6шт. в наборе

В составе:

- Genius C 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.

- 17) Genius C 0,022 U/L, 3*3 (GCM1MK3ULH) -12шт. в наборе

В составе:

- Genius C 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Genius C 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -4шт.
- Genius C 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.

18) Genius C 0,022 U 5*5 /L 3*3 (GCM1MKU345HL3H) -16шт. в наборе

В составе:

- Genius C 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 UR4/5 (верхний правый премоляр) -2шт.
- Genius C 0,022 UL4/5 (верхний левый премоляр) -2шт.
- Genius C 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -4шт.
- Genius C 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.

19) Genius C 0,022 U /L 5*5 (GCM1MK345ULH) -20шт. в наборе

В составе:

- Genius C 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- Genius C 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 UR4/5 (верхний правый премоляр) -2шт.
- Genius C 0,022 UL4/5 (верхний левый премоляр) -2шт.
- Genius C 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -4шт.
- Genius C 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- Genius C 0,022 LL4 (нижний левый первый премоляр) -1шт.
- Genius C 0,022 LL5 (нижний левый второй премоляр) -1шт.
- Genius C 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
- Genius C 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр) -1шт.

1.2. Брекет керамический самолигирующий Genius C 2, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Genius C 2 0,022 UR1 (GCM2M11) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Genius C 2 0,022 UL1 (GCM2M21) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 3) Genius C 2 0,022 UR2 (GCM2M12) (верхний боковой правый резец) -10шт. в наборе
- 4) Genius C 2 0,022 UL2 (GCM2M22) (верхний боковой левый резец) -10шт. в наборе
- 5) Genius C 2 0,022 UR3 (GCM2M13H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 6) Genius C 2 0,022 UL3 (GCM2M23H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 7) Genius C 2 0,022 UR4/5 (GCM2M14H) (верхний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 8) Genius C 2 0,022 UL4/5 (GCM2M24H) (верхний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 9) Genius C 2 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) (GCM2M31) -10шт. в наборе
- 10) Genius C 2 0,022 LR3 (нижний правый клык) (GCM2M43H) -10шт. в наборе
- 11) Genius C 2 0,022 LL3 (нижний левый клык) (GCM2M33H) -10шт. в наборе
- 12) Genius C 2 0,022 LL4 (нижний левый первый премоляр) (GCM2M34H) -10шт. в наборе
- 13) Genius C 2 0,022 LL5 (нижний левый второй премоляр) (GCM2M35H) -10шт. в наборе
- 14) Genius C 2 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) (GCM2M44H) -10шт. в наборе
- 15) Genius C 2 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр) (GCM2M45H) -10шт. в наборе
- 16) Genius C 2 0,022 U 3*3 (GCM2MU3H) -6шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

В составе:

- Genius C 2 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR2 (верхний боковой правый резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.

17) Genius C 2 0,022 U/L, 3*3 (GCM2MK3ULH) -12шт. в наборе

В составе:

- Genius C 2 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR1 (верхний боковой правый резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -4шт.
- Genius C 2 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.

18) Genius C 2 0,022 U 5*5 /L 3*3 (GCM2MKU345HL3H) -16 шт. в наборе

В составе:

- Genius C 2 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR2 (верхний боковой правый резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 UR4/5 (верхний первый премоляр) -2шт.
- Genius C 2 0,022 UL4/5 (верхний премоляр) -2шт.
- Genius C 2 0,022 L1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -4шт.
- Genius C 2 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius C 2 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.

1.3. Брекеты металлические самолигирующие Genius System, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Genius System SLB 0,022 UR1 (GM1M11) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Genius System SLB 0,022 UL1 (GM1M21) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 3) Genius System SLB 0,022 UR2 (GM1M12) (верхний боковой правый резец) -10шт. в наборе
- 4) Genius System SLB 0,022 UL2 (GM1M22) (верхний боковой левый резец) -10шт. в наборе
- 5) Genius System SLB 0,022 UR3 (GM1M13H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 6) Genius System SLB 0,022 UL3 (GM1M23H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 7) Genius System SLB 0,022 UR4/5 (GM1M145H) (верхний правый премоляр) -10шт. в наборе
- 8) Genius System SLB 0,022 UL4/5 (GM1M245H) (верхний левый премоляр) -10шт. в наборе
- 9) Genius System SLB 0,022 UR6 (GM1M16H) (верхний правый моляр) -10шт. в наборе
- 10) Genius System SLB 0,022 UL6 (GM1M26H) (верхний левый моляр) -10шт. в наборе
- 11) Genius System SLB 0,022 LL1,2 (GM1M31) (нижний левый центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 12) Genius System SLB 0,022 LL3 (GM1M33H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 13) Genius System SLB 0,022 LL4 (GM1M34H) (нижний первый левый премоляр) -10шт. в наборе
- 14) Genius System SLB 0,022 LL5 (GM1M35H) (нижний второй левый премоляр) -10шт. в наборе
- 15) Genius System SLB 0,022 LL6 (GM1M36H) (нижний левый моляр) -10шт. в наборе
- 16) Genius System SLB 0,022 LR1,2 (GM1M41) (нижний правый центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 17) Genius System SLB 0,022 LR3 (GM1M43H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 18) Genius System SLB 0,022 LR4 (GM1M44H) (нижний первый правый премоляр) -10шт. в наборе
- 19) Genius System SLB 0,022 LR5 (GM1M45H) (нижний второй правый премоляр) -10шт. в наборе
- 20) Genius System SLB 0,022 LR6 (GM1M46H) (нижний правый моляр) -10шт. в наборе
- 21) Genius System SLB 0,022 U/L, 6*6 (GM1MK3456H) -24 шт. в наборе

В составе:

- Genius System SLB 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UR2 (верхний боковой правый резец) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UR4/5 (верхний правый премоляр) -2шт.
 - Genius System SLB 0,022 UL4/5 (верхний левый премоляр) -2шт.
 - Genius System SLB 0,022 UR6 (верхний правый моляр) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 UL6 (верхний левый моляр) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 LL1,2 (нижний левый центральный, нижний боковой резец) -2 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LL4 (нижний первый левый премоляр) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 LL5 (нижний второй левый премоляр) -1 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LL6 (нижний левый моляр) -1 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LR1,2 (нижний правый центральный, нижний боковой резец) -2 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LR4 (нижний первый правый премоляр) -1 шт.
 - Genius System SLB 0,022 LR5 (нижний второй правый премоляр) -1шт.
 - Genius System SLB 0,022 LR6 (нижний правый моляр) -1 шт.
- 22) Genius System SLB 0,022 U/L, 5*5 (GM1MK345H) -20шт. в наборе

В составе:

- Genius System SLB 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 UR2 (верхний боковой правый резец) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 UR4/5 (верхний правый премоляр) -2шт.
- Genius System SLB 0,022 UL4/5 (верхний левый премоляр) -2шт.
- Genius System SLB 0,022 LL1,2 (нижний левый центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Genius System SLB 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 LL4 (нижний первый левый премоляр) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 LL5 (нижний второй левый премоляр) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 LR1,2 (нижний правый центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Genius System SLB 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 LR4 (нижний первый правый премоляр) -1шт.
- Genius System SLB 0,022 LR5 (нижний второй правый премоляр) -1шт.

1.4. Брекеты металлические самолигирующие Genius 2 System, в наборе.

Варианты исполнения :

- 1) Genius 2 System SLB 0,022 UR1 (GM2M11) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Genius 2 System SLB 0,022 UL1 (GM2M21) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 3) Genius 2 System SLB 0,022 UR2 (GM2M12) (верхний боковой правый резец) -10шт. в наборе
- 4) Genius 2 System SLB 0,022 UL2 (GM2M22) (верхний боковой левый резец) -10шт. в наборе
- 5) Genius 2 System SLB 0,022 UR3 (GM2M13H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 6) Genius 2 System SLB 0,022 UL3 (GM2M23H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 7) Genius 2 System SLB 0,022 UR4/5 (GM2M145H) (верхний правый премоляр) -10шт. в наборе
- 8) Genius 2 System SLB 0,022 UL4/5 (GM2M245H) (верхний левый премоляр) -10шт. в наборе
- 9) Genius 2 System SLB 0,022 UR6 (GM2M16H) (верхний правый моляр) -10шт. в наборе
- 10) Genius 2 System SLB 0,022 UL6 (GM2M26H) (верхний левый моляр) -10шт. в наборе
- 11) Genius 2 System SLB 0,022 LL1,2 (GM2M31) (нижний левый центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 12) Genius 2 System SLB 0,022 LL3 (GM2M33H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 13) Genius 2 System SLB 0,022 LL4 (GM2M34H) (нижний первый левый премоляр) -10шт. в наборе
- 14) Genius 2 System SLB 0,022 LL5 (GM2M35H) (нижний второй левый премоляр) -10шт. в наборе
- 15) Genius 2 System SLB 0,022 LL6 (GM2M36H) (нижний левый моляр) -10шт. в наборе
- 16) Genius 2 System SLB 0,022 LR1,2 (GM2M41) (нижний правый центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 17) Genius 2 System SLB 0,022 LR3 (GM2M43H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
- 18) Genius 2 System SLB 0,022 LR4 (GM2M44H) (нижний первый правый премоляр) -10шт. в наборе
- 19) Genius 2 System SLB 0,022 LR5 (GM2M45H) (нижний второй правый премоляр) -10шт. в наборе
- 20) Genius 2 System SLB 0,022 LR6 (GM2M46H) (нижний правый моляр) -10шт. в наборе
- 21) Genius 2 System SLB 0,022 U/L, 6*6 (GM2MK3456H) -24шт. в наборе

В составе:

- Genius 2 System SLB 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR2 (верхний боковой правый резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR4/5 (верхний правый премоляр) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL4/5 (верхний левый премоляр) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR6 (верхний правый моляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL6 (верхний левый моляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL1,2 (нижний левый центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL4 (нижний первый левый премоляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL5 (нижний второй левый премоляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL6 (нижний левый моляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR1,2 (нижний правый центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR4 (нижний первый правый премоляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR5 (нижний второй правый премоляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR6 (нижний правый моляр) -1шт.
- 22) Genius 2 System SLB 0,022 U/L, 5*5 (GM2MK345H) -20шт. в наборе

В составе:

- Genius 2 System SLB 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR2 (верхний боковой правый резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL2 (верхний боковой левый резец) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UR4/5 (верхний правый премоляр) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 UL4/5 (верхний левый премоляр) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL1,2 (нижний левый центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL4 (нижний первый левый премоляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LL5 (нижний второй левый премоляр) -1шт.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Genius 2 System SLB 0,022 LR1,2 (нижний правый центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR4 (нижний первый правый премоляр) -1шт.
- Genius 2 System SLB 0,022 LR5 (нижний второй правый премоляр) -1шт.

1.5. Брекеты металлические самолигирующие Heimas mini, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Heimas mini (MBT) 0,022 UR1 (HMM1M2211) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Heimas mini (MBT) 0,022 UR2 (HMM1M2212) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе
- 3) Heimas mini (MBT) 0,022 UR3 (HMM1M2213H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 4) Heimas mini (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (HMM1M2214H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 5) Heimas mini (MBT) 0,022 UL1 (HMM1M2221) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 6) Heimas mini (MBT) 0,022 UL2 (HMM1M2222) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
- 7) Heimas mini (MBT) 0,022 UL3 (HMM1M2223H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 8) Heimas mini (MBT) НК 0,022 UL 4/5 (HMM1M2224H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 9) Heimas mini (MBT) 0,022 LL1,2 (HMM1M2231) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 10) Heimas mini (MBT) 0,022 LL3 (HMM1M2233H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 11) Heimas mini (MBT) 0,022 LL4 (HMM1M2234H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 12) Heimas mini (MBT) 0,022 LL5 (HMM1M2235H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 13) Heimas mini (MBT) 0,022 LR1,2 (HMM1M2241) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 14) Heimas mini (MBT) 0,022 LR3 (HMM1M2243H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
- 15) Heimas mini (MBT) 0,022 LR4 (HMM1M2244H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
- 16) Heimas mini (MBT) 0,022 LR5 (HMM1M2245H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 17) Heimas mini (MBT) 0,022 U/L 5-5 (HMM1M22K345H) -20шт. в наборе

В составе:

- Heimas mini (MBT) 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Heimas mini (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Heimas mini (MBT) НК 0,022 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
- Heimas mini (MBT) 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.

1.6. Брекеты металлические EPS SS Bracket, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UR1 (ESM1M2211) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UR2 (ESM1M2212) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 3) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UR3 (ESM1M2213H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 4) EPS SS Bracket (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (ESM1M2214H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 5) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL1 (ESM1M2221) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 6) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL2 (ESM1M2222) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
- 7) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL3 (ESM1M2223H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 8) EPS SS Bracket (MBT) НК 0,022 UL 4/5 (ESM1M2224H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 9) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL1,2 (ESM1M2231) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 10) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL3 (ESM1M2233H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 11) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL4 (ESM1M2234H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 12) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL5 (ESM1M2235H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 13) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR1,2 (ESM1M2241) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 14) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR3 (ESM1M2243H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
- 15) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR4 (ESM1M2244H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
- 16) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR5 (ESM1M2245H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 17) EPS SS Bracket (MBT) 0,022 U/L 5-5 (ESM1M22K345H) -20шт. в наборе

В составе:

- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
- EPS SS Bracket (MBT) 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.

1.7. Брекеты металлические Zeemas A Metal Bracket, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UR1 (ZAM1R1811) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UR2 (ZAM1R1812) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе
- 3) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UR3 (ZAM1R1813H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 4) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,018 UR 4/5 (ZAM1R1814H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 5) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UL1 (ZAM1R1821) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 6) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UL2 (ZAM1R1822) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
- 7) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UL3 (ZAM1R1823H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 8) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,018 UL 4/5 (ZAM1R1824H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 9) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL1,2 (ZAM1R1831) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 10) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL3 (ZAM1R1833H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 11) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL4 (ZAM1R1834H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 12) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL5 (ZAM1R1835H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 13) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR1,2 (ZAM1R1841) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 14) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR3 (ZAM1R1843H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
- 15) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR4 (ZAM1R1844H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
- 16) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR5 (ZAM1R1845H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 17) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 U/L, 5-5 (ZAM1R18K345H) -20шт. в наборе

В составе:

- Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,018 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,018 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,018 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.
- 18) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UR1 (ZAM1R2211) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
 - 19) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UR2 (ZAM1R2212) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе
 - 20) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UR3 (ZAM1R2213H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
 - 21) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,022 UR 4/5 (ZAM1R2214H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
 - 22) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UL1 (ZAM1R2221) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
 - 23) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UL2 (ZAM1R2222) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
 - 24) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UL3 (ZAM1R2223H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
 - 25) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,022 UL 4/5 (ZAM1R2224H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
 - 26) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL1,2 (ZAM1R2231) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
 - 27) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL3 (ZAM1R2233H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
 - 28) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL4 (ZAM1R2234H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
 - 29) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL5 (ZAM1R2235H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
 - 30) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR1,2 (ZAM1R2241) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
 - 31) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR3 (ZAM1R2243H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 32) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR4 (ZAM1R2244H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
- 33) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR5 (ZAM1R2245H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 34) Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 U/L, 5-5 (ZAM1R22K345H) -20шт. в наборе
- В составе:
- Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,022 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) НК 0,022 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (ROTH) 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.
- 35) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UR1 (ZAM1M1811) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 36) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UR2 (ZAM1M1812) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе
- 37) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UR3 (ZAM1M1813H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 38) Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,018 UR 4/5 (ZAM1M1814H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 39) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UL1 (ZAM1M1821) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 40) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UL2 (ZAM1M1822) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
- 41) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UL3 (ZAM1M1823H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 42) Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,018 UL 4/5 (ZAM1M1824H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 43) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL1,2 (ZAM1M1831) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 44) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL3 (ZAM1M1833H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 45) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL4 (ZAM1M1834H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 46) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL5 (ZAM1M1835H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 47) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR1,2 (ZAM1M1841) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 48) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR3 (ZAM1M1843H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
- 49) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR4 (ZAM1M1844H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
- 50) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR5 (ZAM1M1845H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 51) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 U/L, 5-5 (ZAM1M18K345H) -20шт. в наборе
- В составе:
- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,018 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,018 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,018 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.
 - 52) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UR1 (ZAM1M2211) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
 - 53) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UR2 (ZAM1M2212) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе
 - 54) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UR3 (ZAM1M2213H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
 - 55) Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (ZAM1M2214H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
 - 56) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UL1 (ZAM1M2221) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
 - 57) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UL2 (ZAM1M2222) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
 - 58) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UL3 (ZAM1M2223H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
 - 59) Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,022 UL 4/5 (ZAM1M2224H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
 - 60) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL1,2 (ZAM1M2231) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
 - 61) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL3 (ZAM1M2233H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
 - 62) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL4 (ZAM1M2234H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
 - 63) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL5 (ZAM1M2235H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
 - 64) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR1,2 (ZAM1M2241) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
 - 65) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR3 (ZAM1M2243H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
 - 66) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR4 (ZAM1M2244H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
 - 67) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR5 (ZAM1M2245H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
 - 68) Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 U/L, 5-5 (ZAM1M22K345H) -20шт. в наборе
- В составе:
- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) НК 0,022 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
 - Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
- Zeemas A Metal Bracket (MBT) 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.

1.8. Брекет керамический Zeemas C Ceramic Bracket, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UR1 (ZCM1M2211) (верхний правый центральный резец) -10шт. в наборе
- 2) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UR2 (ZCM1M2212) (верхний правый боковой резец) -10шт. в наборе
- 3) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UR3 (ZCM1M2213H) (верхний правый клык) -10шт. в наборе
- 4) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (ZCM1M2214H) (верхний правый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 5) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL1 (ZCM1M2221) (верхний левый центральный резец) -10шт. в наборе
- 6) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL2 (ZCM1M2222) (верхний левый боковой резец) -10шт. в наборе
- 7) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL3 (ZCM1M2223H) (верхний левый клык) -10шт. в наборе
- 8) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) НК 0,022 UL 4/5 (ZCM1M2224H) (верхний левый первый премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 9) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL1,2 (ZCM1M2231) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 10) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL3 (ZCM1M2233H) (нижний левый клык) -10шт. в наборе
- 11) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL4 (ZCM1M2234H) (нижний первый премоляр) -10шт. в наборе
- 12) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL5 (ZCM1M2235H) (нижний второй премоляр) -10шт. в наборе
- 13) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR1,2 (ZCM1M2241) (нижний центральный, нижний боковой резец) -10шт. в наборе
- 14) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR3 (ZCM1M2243H) (нижний правый клык) -10шт. в наборе
- 15) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR4 (ZCM1M2244H) (нижний правый первый премоляр) -10шт. в наборе
- 16) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR5 (ZCM1M2245H) (нижний правый второй премоляр с крючком) -10шт. в наборе
- 17) Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 U/L, 5-5 (ZCM1M22K3H) -20шт. в наборе

В составе:

- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UR1 (верхний правый центральный резец) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UR2 (верхний правый боковой резец) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UR3 (верхний правый клык) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) НК 0,022 UR 4/5 (верхний правый премоляр с крючком) -2шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL1 (верхний левый центральный резец) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL2 (верхний левый боковой резец) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL3 (верхний левый клык) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 UL 4/5 (верхний левый первый премоляр с крючком) -2шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL3 (нижний левый клык) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL4 (нижний первый премоляр) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LL5 (нижний второй премоляр) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR1,2 (нижний центральный, нижний боковой резец) -2шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR3 (нижний правый клык) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR4 (нижний правый первый премоляр) -1шт.
- Zeemas C Ceramic Bracket (MBT) 0,022 LR5 (нижний правый второй премоляр с крючком) -1шт.

II. Щечная замок-трубка в наборах

2.1 Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Buccal Tube Bondable UR7 Roth .018 Sgl Nonconv (верхний правый второй моляр) (B12NCR1817) -10шт. в наборе
- 2) Buccal Tube Bondable UL7 Roth .018 Sgl Nonconv (верхний левый второй моляр) (B12NCR1827) -10шт. в наборе
- 3) Buccal Tube Bondable LR7 Roth .018 Sgl Nonconv (нижний правый второй моляр) (B12NCR1847) -10шт. в наборе
- 4) Buccal Tube Bondable LL7 Roth .018 Sgl Nonconv (нижний левый второй моляр) (B12NCR1837) -10шт. в наборе
- 5) Buccal Tube Bondable UR7 Roth .022 Sgl Nonconv (верхний правый второй моляр) (B12NCR2217) -10шт. в наборе
- 6) Buccal Tube Bondable UL7 Roth .022 Sgl Nonconv (верхний левый второй моляр) (B12NCR2227) -10шт. в наборе
- 7) Buccal Tube Bondable LR7 Roth .022 Sgl Nonconv (нижний правый второй моляр) (B12NCR2247) -10шт. в наборе
- 8) Buccal Tube Bondable LL7 Roth .022 Sgl Nonconv (нижний левый второй моляр) (B12NCR2237) -10шт. в наборе
- 9) Buccal Tube Bondable UR7 MBT .018 Sgl Nonconv (верхний правый второй моляр) (B12NCM1817) -10шт. в наборе
- 10) Buccal Tube Bondable UL7 MBT .018 Sgl Nonconv (верхний левый второй моляр) (B12NCM1827) -10шт. в наборе
- 11) Buccal Tube Bondable LR7 MBT .018 Sgl Nonconv (нижний правый второй моляр) (B12NCM1847) -10шт. в наборе
- 12) Buccal Tube Bondable LL7 MBT .018 Sgl Nonconv (нижний левый второй моляр) (B12NCM1837) -10шт. в наборе
- 13) Buccal Tube Bondable UR7 MBT .022 Sgl Nonconv (верхний правый второй моляр) (B12NCM2217) -10шт. в наборе
- 14) Buccal Tube Bondable UL7 MBT .022 Sgl Nonconv (верхний левый второй моляр) (B12NCM2227) -10шт. в наборе
- 15) Buccal Tube Bondable LR7 MBT .022 Sgl Nonconv (нижний правый второй моляр) (B12NCM2247) -10шт. в наборе
- 16) Buccal Tube Bondable LL7 MBT .022 Sgl Nonconv (нижний левый второй моляр) (B12NCM2237) -10шт. в наборе
- 17) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 Roth .018 Sgl Conv (верхний правый первый моляр) (B11CR1816) -10шт. в наборе
- 18) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 Roth .018 Sgl Conv (верхний левый первый моляр) (B11CR1826) -10шт. в наборе
- 19) EZPeel Buccal Tube Bondable LR6 Roth .018 Sgl Conv (нижний правый первый моляр) (B11CR1846) -10шт. в наборе
- 20) EZPeel Buccal Tube Bondable LL6 Roth .018 Sgl Conv (нижний левый первый моляр) (B11CR1836) -10шт. в наборе
- 21) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 Roth .022 Sgl Conv (верхний правый первый моляр) (B11CR2216) -10шт. в наборе
- 22) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 Roth .022 Sgl Conv (верхний левый первый моляр) (B11CR2226) -10шт. в наборе
- 23) EZPeel Buccal Tube Bondable LR6 Roth .022 Sgl Conv (нижний правый первый моляр) (B11CR2246) -10шт. в наборе
- 24) EZPeel Buccal Tube Bondable LL6 Roth .022 Sgl Conv (нижний левый первый моляр) (B11CR2236) -10шт. в наборе
- 25) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 MBT .018 Sgl Conv (верхний правый первый моляр) (B11CM1816) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 26) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 MBT .018 Sgl Conv (верхний левый первый моляр) (B11CM1826) - 10шт. в наборе
- 27) EZPeel Buccal Tube Bondable LR6 MBT .018 Sgl Conv (нижний правый первый моляр) (B11CM1846) - 10шт. в наборе
- 28) EZPeel Buccal Tube Bondable LL6 MBT .018 Sgl Conv (нижний левый первый моляр) (B11CM1836) - 10шт. в наборе
- 29) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 MBT .022 Sgl Conv (верхний правый первый моляр) (B11CM2216) - 10шт. в наборе
- 30) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 MBT .022 Sgl Conv (верхний левый первый моляр) (B11CM2226) - 10шт. в наборе
- 31) EZPeel Buccal Tube Bondable LR6 MBT .022 Sgl Conv (нижний правый первый моляр) (B11CM2246) - 10шт. в наборе
- 32) EZPeel Buccal Tube Bondable LL6 MBT .022 Sgl Conv (нижний левый первый моляр) (B11CM2236) - 10шт. в наборе
- 33) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 MBT .022 Sgl Conv (верхний правый первый моляр) (W11CM2216) - 10шт. в наборе
- 34) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 MBT .022 Sgl Conv (верхний левый первый моляр) (W11CM2226) - 10шт. в наборе
- 35) EZPeel Buccal Tube Weldable LR6 MBT .022 Sgl Conv (нижний правый первый моляр) (W11CM2246) - 10шт. в наборе
- 36) EZPeel Buccal Tube Weldable LL6 MBT .022 Sgl Conv (нижний левый первый моляр) (W11CM2236) - 10шт. в наборе
- 37) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 Roth .022 Sgl Conv (верхний правый первый моляр) (W11CR2216) - 10шт. в наборе
- 38) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 Roth .022 Sgl Conv (верхний левый первый моляр) (W11CR2226) - 10шт. в наборе
- 39) EZPeel Buccal Tube Weldable LR6 Roth .022 Sgl Conv (нижний правый первый моляр) (W11CR2246) - 10шт. в наборе
- 40) EZPeel Buccal Tube Weldable LL6 Roth .022 Sgl Conv (нижний левый первый моляр) (W11CR2236) - 10шт. в наборе
- 41) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 Roth .018 Dbl Conv (верхний правый первый моляр) (W51DCR1816) - 10шт. в наборе
- 42) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 Roth .018 Dbl Conv (верхний левый первый моляр) (W51DCR1826) - 10шт. в наборе
- 43) EZPeel Buccal Tube Weldable LR6 Roth .018 Dbl Conv (нижний правый первый моляр) (W51DCR1846) - 10шт. в наборе
- 44) EZPeel Buccal Tube Weldable LL6 Roth .018 Dbl Conv (нижний левый первый моляр) (W51DCR1836) - 10шт. в наборе
- 45) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 Roth .022 Dbl Conv (верхний правый первый моляр) (W51DCR2216) - 10шт. в наборе
- 46) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 Roth .022 Dbl Conv (верхний левый первый моляр) (W51DCR2226) - 10шт. в наборе
- 47) EZPeel Buccal Tube Weldable LR6 Roth .022 Dbl Conv (нижний правый первый моляр) (W51DCR2246) - 10шт. в наборе
- 48) EZPeel Buccal Tube Weldable LL6 Roth .022 Dbl Conv (нижний левый первый моляр) (W51DCR2236) - 10шт. в наборе
- 49) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 MBT .018 Dbl Conv (верхний правый первый моляр) (W51DCM1816) - 10шт. в наборе
- 50) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 MBT .018 Dbl Conv (верхний левый первый моляр) (W51DCM1826) - 10шт. в наборе
- 51) EZPeel Buccal Tube Weldable LR6 MBT .018 Dbl Conv (нижний правый первый моляр) (W51DCM1846) - 10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 52) EZPeel Buccal Tube Weldable LL6 MBT .018 Dbl Conv (нижний левый первый моляр) (W51DCM1836) - 10шт. в наборе
- 53) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 MBT .022 Dbl Conv (верхний правый первый моляр) (W51DCM2216) - 10шт. в наборе
- 54) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 MBT .022 Dbl Conv (верхний левый первый моляр) (W51DCM2226) - 10шт. в наборе
- 55) EZPeel Buccal Tube Weldable LR6 MBT .022 Dbl Conv (нижний правый первый моляр) (W51DCM2246) - 10шт. в наборе
- 56) EZPeel Buccal Tube Weldable LL6 MBT .022 Dbl Conv (нижний левый первый моляр) (W51DCM2236) - 10шт. в наборе
- 57) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 Roth .018 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (B51TCR1816) - 10шт. в наборе
- 58) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 Roth .018 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (B51TCR1826) - 10шт. в наборе
- 59) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 Roth .022 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (B51TCR2216) - 10шт. в наборе
- 60) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 Roth .022 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (B51TCR2226) - 10шт. в наборе
- 61) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 MBT .018 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (B51TCM1816) - 10шт. в наборе
- 62) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 MBT .018 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (B51TCM1826) - 10шт. в наборе
- 63) EZPeel Buccal Tube Bondable UR6 MBT .022 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (B51TCM2216) - 10шт. в наборе
- 64) EZPeel Buccal Tube Bondable UL6 MBT .022 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (B51TCM2226) - 10шт. в наборе
- 65) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 Roth .018 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (W51TCR1816) - 10шт. в наборе
- 66) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 Roth .018 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (W51TCR1826) - 10шт. в наборе
- 67) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 Roth .022 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (W51TCR2216) - 10шт. в наборе
- 68) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 Roth .022 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (W51TCR2226) - 10шт. в наборе
- 69) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 MBT .018 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (W51TCM1816) - 10шт. в наборе
- 70) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 MBT .018 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (W51TCM1826) - 10шт. в наборе
- 71) EZPeel Buccal Tube Weldable UR6 MBT .022 Triple Conv (верхний правый первый моляр) (W51TCM2216) - 10шт. в наборе
- 72) EZPeel Buccal Tube Weldable UL6 MBT .022 Triple Conv (верхний левый первый моляр) (W51TCM2226) - 10шт. в наборе
- 73) TUBA Buccal Tube Bondable II UR6 Roth .018 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр) (B22NCR1816) - 10шт. в наборе
- 74) TUBA Buccal Tube Bondable II UL6 Roth .018 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр) (B22NCR1826) - 10шт. в наборе
- 75) TUBA Buccal Tube Bondable II LR6 Roth .018 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр) (B22NCR1846) - 10шт. в наборе
- 76) TUBA Buccal Tube Bondable II LL6 Roth .018 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр) (B22NCR1836) - 10шт. в наборе
- 77) TUBA Buccal Tube Bondable II UR6 Roth .022 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр) (B22NCR2216) - 10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 78) TUBA Buccal Tube Bondable II UL6 Roth .022 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(B22NCR2226) -10шт. в наборе
- 79) TUBA Buccal Tube Bondable II LR6 Roth .022 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(B22NCR2246) -10шт. в наборе
- 80) TUBA Buccal Tube Bondable II LL6 Roth .022 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(B22NCR2236) -10шт. в наборе
- 81) TUBA Buccal Tube Bondable II UR6 MBT.018 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр)
(B22NCM1816) -10шт. в наборе
- 82) TUBA Buccal Tube Bondable II UL6 MBT .018 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(B22NCM1826) -10шт. в наборе
- 83) TUBA Buccal Tube Bondable II LR6 MBT .018 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(B22NCM1846) -10шт. в наборе
- 84) TUBA Buccal Tube Bondable II LL6 MBT .018 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(B22NCM1836) -10шт. в наборе
- 85) TUBA Buccal Tube Bondable II UR6 MBT.022 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр)
(B22NCM2216) -10шт. в наборе
- 86) TUBA Buccal Tube Bondable II UL6 MBT .022 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(B22NCM2226) -10шт. в наборе
- 87) TUBA Buccal Tube Bondable II LR6 MBT .022 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(B22NCM2246) -10шт. в наборе
- 88) TUBA Buccal Tube Bondable II LL6 MBT .022 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(B22NCM2236) -10шт. в наборе
- 89) TUBA Buccal Tube Weldable II UR6 Roth.018 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр)
(W22NCR1816)-10шт. в наборе
- 90) TUBA Buccal Tube Weldable II UL6 Roth .018 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(W22NCR1826) -10шт. в наборе
- 91) TUBA Buccal Tube Weldable II LR6 Roth .018 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(W22NCR1846) -10шт. в наборе
- 92) TUBA Buccal Tube Weldable II LL6 Roth .018 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(W22NCR1836) -10шт. в наборе
- 93) TUBA Buccal Tube Weldable II UR6 Roth.022 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр)
(W22NCR2216) -10шт. в наборе
- 94) TUBA Buccal Tube Weldable II UL6 Roth .022 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(W22NCR2226) -10шт. в наборе
- 95) TUBA Buccal Tube Weldable II LR6 Roth .022 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(W22NCR2246) -10шт. в наборе
- 96) TUBA Buccal Tube Weldable II LL6 Roth .022 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(W22NCR2236) -10шт. в наборе
- 97) TUBA Buccal Tube Weldable II UR6 MBT.018 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр)
(W22NCM1816) -10шт. в наборе
- 98) TUBA Buccal Tube Weldable II UL6 MBT .018 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(W22NCM1826) -10шт. в наборе
- 99) TUBA Buccal Tube Weldable II LR6 MBT .018 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(W22NCM1846) -10шт. в наборе
- 100) TUBA Buccal Tube Weldable II LL6 MBT .018 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(W22NCM1836) -10шт. в наборе
- 101) TUBA Buccal Tube Weldable II UR6 MBT.022 Sgl Nonconv (верхний правый первый моляр)
(W22NCM2216) -10шт. в наборе
- 102) TUBA Buccal Tube Weldable II UL6 MBT .022 Sgl Nonconv (верхний левый первый моляр)
(W22NCM2226) -10шт. в наборе
- 103) TUBA Buccal Tube Weldable II LR6 MBT .022 Sgl Nonconv (нижний правый первый моляр)
(W22NCM2246) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

104) TUBA Buccal Tube Weldable II LL6 MBT .022 Sgl Nonconv (нижний левый первый моляр)
(W22NCM2236) -10шт. в наборе

III. Дуга ортодонтическая в наборах

3.1 Дуга ортодонтическая нитиноловая Quana NiTi, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 012U (QSENI12U) -10шт. в наборе
- 2) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 012L (QSENI12L) -10шт. в наборе
- 3) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 012U W/Pre-stop (QSENI12US) -10шт. в наборе
- 4) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 012L W/Pre-stop (QSENI12LS) -10шт. в наборе
- 5) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 012U (QSENN12U) -10шт. в наборе
- 6) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 012L (QSENN12L) -10шт. в наборе
- 7) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 012U W/Pre-stop (QSENN12US) -10шт. в наборе
- 8) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 012L W/Pre-stop (QSENN12LS) -10шт. в наборе
- 9) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 012U/L (QSENU12) -10шт. в наборе
- 10) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 012U/L W/Pre-stop (QSENU12S) -10шт. в наборе
- 11) Quana RCS NiTi Archwire 012U (QSERCS12U) -10шт. в наборе
- 12) Quana RCS NiTi Archwire 012L (QSERCS12L) -10шт. в наборе
- 13) Quana Black NiTi Archwire INT 012U (QSEBI12U) -10шт. в наборе
- 14) Quana Black NiTi Archwire INT 012L (QSEBI12L) -10шт. в наборе
- 15) Quana Black NiTi Archwire NAT2 012U (QSEBN12U) -10шт. в наборе
- 16) Quana Black NiTi Archwire NAT2 012L (QSEBN12L) -10шт. в наборе
- 17) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 014U (QSENI14U) -10шт. в наборе
- 18) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 014L (QSENI14L) -10шт. в наборе
- 19) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 014U W/Pre-stop (QSENI14US) -10шт. в наборе
- 20) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 014L W/Pre-stop (QSENI14LS) -10шт. в наборе
- 21) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 014U (QSENN14U) -10шт. в наборе
- 22) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 014L (QSENN14L) -10шт. в наборе
- 23) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 014U W/Pre-stop (QSENN14US) -10шт. в наборе
- 24) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 014L W/Pre-stop (QSENN14LS) -10шт. в наборе
- 25) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 014U/L (QSENU12) -10шт. в наборе
- 26) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 014U/L W/Pre-stop (QSENU12U) -10шт. в наборе
- 27) Quana RCS NiTi Archwire 014U (QSERCS14U) -10шт. в наборе
- 28) Quana RCS NiTi Archwire 014L (QSERCS14L) -10шт. в наборе
- 29) Quana Black NiTi Archwire INT 014U (QSEBI14U) -10шт. в наборе
- 30) Quana Black NiTi Archwire INT 014L (QSEBI14L) -10шт. в наборе
- 31) Quana Black NiTi Archwire NAT2 014U (QSEBN14U) -10шт. в наборе
- 32) Quana Black NiTi Archwire NAT2 014L (QSEBN14L) -10шт. в наборе
- 33) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 016U (QSENI16U) -10шт. в наборе
- 34) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 016L (QSENI16L) -10шт. в наборе
- 35) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 016U W/Pre-stop (QSENI16US) -10шт. в наборе
- 36) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 016L W/Pre-stop (QSENI16LS) -10шт. в наборе
- 37) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 016U (QSENN16U) -10шт. в наборе
- 38) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 016L (QSENN16L) -10шт. в наборе
- 39) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 016U W/Pre-stop (QSENN16US) -10шт. в наборе
- 40) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 016L W/Pre-stop (QSENN16LS) -10шт. в наборе
- 41) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 016U/L (QSENU16) -10шт. в наборе
- 42) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 016U/L W/Pre-stop (QSENU16S) -10шт. в наборе
- 43) Quana RCS NiTi Archwire 016U (QSERCS16U) -10шт. в наборе
- 44) Quana RCS NiTi Archwire 016L (QSERCS16L) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 45) Quana Black NITI Archwire INT 016U (QSEBI16U) -10шт. в наборе
- 46) Quana Black NITI Archwire INT 016L (QSEBI16L) -10шт. в наборе
- 47) Quana Black NITI Archwire NAT2 016U (QSEBN16U) -10шт. в наборе
- 48) Quana Black NITI Archwire NAT2 016L (QSEBN16L) -10шт. в наборе
- 49) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 018U (QSENI18U) -10шт. в наборе
- 50) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 018L (QSENI18L) -10шт. в наборе
- 51) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 018U W/Pre-stop (QSENI18US) -10шт. в наборе
- 52) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 018L W/Pre-stop (QSENI18LS) -10шт. в наборе
- 53) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 018U (QSENN18U) -10шт. в наборе
- 54) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 018L (QSENN18L) -10шт. в наборе
- 55) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 018U W/Pre-stop (QSENN18US) -10шт. в наборе
- 56) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 018L W/Pre-stop (QSENN18LS) -10шт. в наборе
- 57) Quana SuperElastic NITI Archwire UNV 018U/L (QSENU18) -10шт. в наборе
- 58) Quana SuperElastic NITI Archwire UNV 018U/L W/Pre-stop (QSENU18S) -10шт. в наборе
- 59) Quana RCS NITI Archwire 018U (QSERCS18U) -10шт. в наборе
- 60) Quana RCS NITI Archwire 018L (QSERCS18L) -10шт. в наборе
- 61) Quana Black NITI Archwire INT 018U (QSEBI18U) -10шт. в наборе
- 62) Quana Black NITI Archwire INT 018L (QSEBI18L) -10шт. в наборе
- 63) Quana Black NITI Archwire NAT2 018U (QSEBN18U) -10шт. в наборе
- 64) Quana Black NITI Archwire NAT2 018L (QSEBN18L) -10шт. в наборе
- 65) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 020U (QSENI20U) -10шт. в наборе
- 66) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 020L (QSENI20L) -10шт. в наборе
- 67) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 020U W/Pre-stop (QSENI20US) -10шт. в наборе
- 68) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 020L W/Pre-stop (QSENI20LS) -10шт. в наборе
- 69) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 020U (QSENN20U) -10шт. в наборе
- 70) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 020L (QSENN20L) -10шт. в наборе
- 71) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 020U W/Pre-stop (QSENN20US) -10шт. в наборе
- 72) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 020L W/Pre-stop (QSENN20LS) -10шт. в наборе
- 73) Quana SuperElastic NITI Archwire UNV 020U/L (QSENU20) -10шт. в наборе
- 74) Quana SuperElastic NITI Archwire UNV 020U/L W/Pre-stop (QSENU20S) -10шт. в наборе
- 75) Quana RCS NITI Archwire 020U (QSERCS20U) -10шт. в наборе
- 76) Quana RCS NITI Archwire 020L (QSERCS20L) -10шт. в наборе
- 77) Quana Black NITI Archwire INT 020U (QSEBI20U) -10шт. в наборе
- 78) Quana Black NITI Archwire INT 020L (QSEBI20L) -10шт. в наборе
- 79) Quana Black NITI Archwire NAT2 020U (QSEBN20U) -10шт. в наборе
- 80) Quana Black NITI Archwire NAT2 020L (QSEBN20L) -10шт. в наборе
- 81) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 1425U (QSENI1425U) -10шт. в наборе
- 82) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 1425L (QSENI1425L) -10шт. в наборе
- 83) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 1425U W/Pre-stop (QSENI1425US) -10шт. в наборе
- 84) Quana SuperElastic NITI Archwire INT 1425L W/Pre-stop (QSENI1425LS) -10шт. в наборе
- 85) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 1425U (QSENN1425U) -10шт. в наборе
- 86) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 1425L (QSENN1425L) -10шт. в наборе
- 87) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 1425U W/Pre-stop (QSENN1425US) -10шт. в наборе
- 88) Quana SuperElastic NITI Archwire NAT2 1425L W/Pre-stop (QSENN1425LS) -10шт. в наборе
- 89) Quana SuperElastic NITI Archwire UNV 1425U/L (QSENI1425) -10шт. в наборе
- 90) Quana SuperElastic NITI Archwire UNV 1425U/L W/Pre-stop (QSENU1425S) -10шт. в наборе
- 91) Quana RCS NITI Archwire 1425U (QSERCS1425U) -10шт. в наборе
- 92) Quana RCS NITI Archwire 1425L (QSERCS1425L) -10шт. в наборе
- 93) Quana Black NITI Archwire INT 1425U (QSEBI1425U) -10шт. в наборе
- 94) Quana Black NITI Archwire INT 1425L (QSEBI1425L) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 95) Quana Black NITi Archwire NAT2 1425U (QSEBN1425U) -10шт. в наборе
- 96) Quana Black NITi Archwire NAT2 1425L (QSEBN1425U) -10шт. в наборе
- 97) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1616U (QSENI1616U) -10шт. в наборе
- 98) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1616L (QSENI1616L) -10шт. в наборе
- 99) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1616U W/Pre-stop (QSENI1616US) -10шт. в наборе
- 100) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1616L W/Pre-stop (QSENI1616LS) -10шт. в наборе
- 101) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1616U (QSENN1616U) -10шт. в наборе
- 102) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1616L (QSENN1616L) -10шт. в наборе
- 103) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1616U W/Pre-stop (QSENN1616US) -10шт. в наборе
- 104) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1616L W/Pre-stop (QSENN1616LS) -10шт. в наборе
- 105) Quana SuperElastic NITi Archwire UNV 1616U/L (QSENU1616) -10шт. в наборе
- 106) Quana SuperElastic NITi Archwire UNV 1616U/L W/Pre-stop (QSENU1616S) -10шт. в наборе
- 107) Quana RCS NITi Archwire 1616U (QSERCS1616U) -10шт. в наборе
- 108) Quana RCS NITi Archwire 1616L (QSERCS1616L) -10шт. в наборе
- 109) Quana Black NITi Archwire INT 1616U (QSEBI1616U) -10шт. в наборе
- 110) Quana Black NITi Archwire INT 1616L (QSEBI1616U) -10шт. в наборе
- 111) Quana Black NITi Archwire NAT2 1616U (QSEBN1616U) -10шт. в наборе
- 112) Quana Black NITi Archwire NAT2 1616L (QSEBN1616L) -10шт. в наборе
- 113) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1622U (QSENI1622U) -10шт. в наборе
- 114) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1622L (QSENI1622L) -10шт. в наборе
- 115) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1622U W/Pre-stop (QSENI1622US) -10шт. в наборе
- 116) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1622L W/Pre-stop (QSENI1622LS) -10шт. в наборе
- 117) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1622U (QSENN1622U) -10шт. в наборе
- 118) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1622L (QSENN1622L) -10шт. в наборе
- 119) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1622U W/Pre-stop (QSENN1622US) -10шт. в наборе
- 120) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1622L W/Pre-stop (QSENN1622LS) -10шт. в наборе
- 121) Quana SuperElastic NITi Archwire UNV 1622U/L (QSENU1622) -10шт. в наборе
- 122) Quana SuperElastic NITi Archwire UNV 1622U/L W/Pre-stop (QSENU1622S) -10шт. в наборе
- 123) Quana RCS NITi Archwire 1622U (QSERCS1622U) -10шт. в наборе
- 124) Quana RCS NITi Archwire 1622L (QSERCS1622L) -10шт. в наборе
- 125) Quana Black NITi Archwire INT 1622U (QSEBI1622U) -10шт. в наборе
- 126) Quana Black NITi Archwire INT 1622L (QSEBI1622L) -10шт. в наборе
- 127) Quana Black NITi Archwire NAT2 1622U (QSEBN1622U) -10шт. в наборе
- 128) Quana Black NITi Archwire NAT2 1622L (QSEBN1622L) -10шт. в наборе
- 129) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1625U (QSENI1625U) -10шт. в наборе
- 130) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1625L (QSENI1625L) -10шт. в наборе
- 131) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1625U W/Pre-stop (QSENI1625US) -10шт. в наборе
- 132) Quana SuperElastic NITi Archwire INT 1625L W/Pre-stop (QSENI1625LS) -10шт. в наборе
- 133) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1625U (QSENN1625U) -10шт. в наборе
- 134) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1625L (QSENN1625L) -10шт. в наборе
- 135) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1625U W/Pre-stop (QSENN1625US) -10шт. в наборе
- 136) Quana SuperElastic NITi Archwire NAT2 1625L W/Pre-stop (QSENN1625LS) -10шт. в наборе
- 137) Quana SuperElastic NITi Archwire UNV 1625U/L (QSENU1625) -10шт. в наборе
- 138) Quana SuperElastic NITi Archwire UNV 1625U/L W/Pre-stop (QSENU1625S) -10шт. в наборе
- 139) Quana RCS NITi Archwire 1625U (QSERCS1625U) -10шт. в наборе
- 140) Quana RCS NITi Archwire 1625L (QSERCS1625L) -10шт. в наборе
- 141) Quana Black NITi Archwire INT 1625U (QSEBI1625U) -10шт. в наборе
- 142) Quana Black NITi Archwire INT 1625L (QSEBI1625L) -10шт. в наборе
- 143) Quana Black NITi Archwire NAT2 1625U (QSEBN1625U) -10шт. в наборе
- 144) Quana Black NITi Archwire NAT2 1625L (QSEBN1625L) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 145) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1725U (QSENI1725U) -10шт. в наборе
- 146) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1725L (QSENI1725L) -10шт. в наборе
- 147) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1725U W/Pre-stop (QSENI1725US) -10шт. в наборе
- 148) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1725L W/Pre-stop (QSENI1725LS) -10шт. в наборе
- 149) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1725U (QSENN1725U) -10шт. в наборе
- 150) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1725L (QSENN1725L) -10шт. в наборе
- 151) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1725U W/Pre-stop (QSENN1725US) -10шт. в наборе
- 152) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1725L W/Pre-stop (QSENN1725LS) -10шт. в наборе
- 153) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1725U/L (QSENU1725) -10шт. в наборе
- 154) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1725U/L W/Pre-stop (QSENU1725S) -10шт. в наборе
- 155) Quana RCS NiTi Archwire 1725U (QSERCS1725U) -10шт. в наборе
- 156) Quana RCS NiTi Archwire 1725L (QSERCS1725L) -10шт. в наборе
- 157) Quana Black NITI Archwire INT 1725U (QSEBI1725U) -10шт. в наборе
- 158) Quana Black NITI Archwire INT 1725L (QSEBI1725L) -10шт. в наборе
- 159) Quana Black NITI Archwire NAT2 1725U (QSEBN1725U) -10шт. в наборе
- 160) Quana Black NITI Archwire NAT2 1725L (QSEBN1725L) -10шт. в наборе
- 161) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1818U (QSENI1818U) -10шт. в наборе
- 162) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1818L (QSENI1818L) -10шт. в наборе
- 163) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1818U W/Pre-stop (QSENI1818US) -10шт. в наборе
- 164) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1818L W/Pre-stop (QSENI1818LS) -10шт. в наборе
- 165) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1818U (QSENN1818U) -10шт. в наборе
- 166) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1818L (QSENN1818L) -10шт. в наборе
- 167) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1818U W/Pre-stop (QSENN1818US) -10шт. в наборе
- 168) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1818L W/Pre-stop (QSENN1818LS) -10шт. в наборе
- 169) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1818U/L (QSENU1818) -10шт. в наборе
- 170) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1818U/L W/Pre-stop (QSENU1818S) -10шт. в наборе
- 171) Quana RCS NITI Archwire 1818U (QSERCS1818U) -10шт. в наборе
- 172) Quana RCS NITI Archwire 1818L (QSERCS1818L) -10шт. в наборе
- 173) Quana Black NITI Archwire INT 1818U (QSEBI1818U) -10шт. в наборе
- 174) Quana Black NITI Archwire INT 1818L (QSEBI1818L) -10шт. в наборе
- 175) Quana Black NITI Archwire NAT2 1818U (QSEBN1818U) -10шт. в наборе
- 176) Quana Black NITI Archwire NAT2 1818L (QSEBN1818L) -10шт. в наборе
- 177) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1825U (QSENI1825U) -10шт. в наборе
- 178) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1825L (QSENI1825L) -10шт. в наборе
- 179) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1825U W/Pre-stop (QSENI1825US) -10шт. в наборе
- 180) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1825L W/Pre-stop (QSENI1825LS) -10шт. в наборе
- 181) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1825U (QSENN1825U) -10шт. в наборе
- 182) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1825L (QSENN1825L) -10шт. в наборе
- 183) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1825U W/Pre-stop (QSENN1825US) -10шт. в наборе
- 184) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1825L W/Pre-stop (QSENN1825LS) -10шт. в наборе
- 185) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1825U/L (QSENU1825) -10шт. в наборе
- 186) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1825U/L W/Pre-stop (QSENU1825S) -10шт. в наборе
- 187) Quana RCS NITI Archwire 1825U (QSERCS1825U) -10шт. в наборе
- 188) Quana RCS NITI Archwire 1825L (QSERCS1825L) -10шт. в наборе
- 189) Quana Black NITI Archwire INT 1825U (QSEBI1825U) -10шт. в наборе
- 190) Quana Black NITI Archwire INT 1825L (QSEBI1825L) -10шт. в наборе
- 191) Quana Black NITI Archwire NAT2 1825U (QSEBN1825U) -10шт. в наборе
- 192) Quana Black NITI Archwire NAT2 1825L (QSEBN1825L) -10шт. в наборе
- 193) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1925U (QSENI1925U) -10шт. в наборе
- 194) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1925L (QSENI1925L) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 195) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1925U W/Pre-stop (QSENI1925US) -10шт. в наборе
- 196) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 1925L W/Pre-stop (QSENI1925LS) -10шт. в наборе
- 197) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1925U (QSENN1925U) -10шт. в наборе
- 198) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1925L (QSENN1925L) -10шт. в наборе
- 199) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1925U W/Pre-stop (QSENN1925US) -10шт. в наборе
- 200) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 1925L W/Pre-stop (QSENN1925LS) -10шт. в наборе
- 201) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1925U/L (QSENU1925) -10шт. в наборе
- 202) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 1925U/L W/Pre-stop (QSENU1925S) -10шт. в наборе
- 203) Quana RCS NiTi Archwire 1925U (QSERCS1925U) -10шт. в наборе
- 204) Quana RCS NiTi Archwire 1925L (QSERCS1925L) -10шт. в наборе
- 205) Quana Black NiTi Archwire INT 1925U (QSEBI1925U) -10шт. в наборе
- 206) Quana Black NiTi Archwire INT 1925L (QSEBI1925L) -10шт. в наборе
- 207) Quana Black NiTi Archwire NAT2 1925U (QSEBN1925U) -10шт. в наборе
- 208) Quana Black NiTi Archwire NAT2 1925L (QSEBN1925L) -10шт. в наборе
- 209) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2020U (QSENI2020U) -10шт. в наборе
- 210) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2020L (QSENI2020L) -10шт. в наборе
- 211) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2020U W/Pre-stop (QSENI2020US) -10шт. в наборе
- 212) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2020L W/Pre-stop (QSENI2020LS) -10шт. в наборе
- 213) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2020U (QSENN2020U) -10шт. в наборе
- 214) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2020L (QSENN2020L) -10шт. в наборе
- 215) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2020U W/Pre-stop (QSENN2020US) -10шт. в наборе
- 216) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2020L W/Pre-stop (QSENN2020LS) -10шт. в наборе
- 217) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 2020U/L (QSENU2020) -10шт. в наборе
- 218) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 2020U/L W/Pre-stop (QSENU2020S) -10шт. в наборе
- 219) Quana RCS NiTi Archwire 2020U (QSERCS2020U) -10шт. в наборе
- 220) Quana RCS NiTi Archwire 2020L (QSERCS2020L) -10шт. в наборе
- 221) Quana Black NiTi Archwire INT 2020U (QSEBI2020U) -10шт. в наборе
- 222) Quana Black NiTi Archwire INT 2020L (QSEBI2020L) -10шт. в наборе
- 223) Quana Black NiTi Archwire NAT2 2020U (QSEBN2020U) -10шт. в наборе
- 224) Quana Black NiTi Archwire NAT2 2020L (QSEBN2020L) -10шт. в наборе
- 225) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2125U (QSENI2125U) -10шт. в наборе
- 226) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2125L (QSENI2125L) -10шт. в наборе
- 227) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2125U W/Pre-stop (QSENI2125US) -10шт. в наборе
- 228) Quana SuperElastic NiTi Archwire INT 2125L W/Pre-stop (QSENI2125LS) -10шт. в наборе
- 229) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2125U (QSENN2125U) -10шт. в наборе
- 230) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2125L (QSENN2125L) -10шт. в наборе
- 231) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2125U W/Pre-stop (QSENN2125US) -10шт. в наборе
- 232) Quana SuperElastic NiTi Archwire NAT2 2125L W/Pre-stop (QSENN2125LS) -10шт. в наборе
- 233) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 2125U/L (QSENU2125) -10шт. в наборе
- 234) Quana SuperElastic NiTi Archwire UNV 2125U/L W/Pre-stop (QSENU2125S) -10шт. в наборе
- 235) Quana RCS NiTi Archwire 2125U (QSERCS2125U) -10шт. в наборе
- 236) Quana RCS NiTi Archwire 2125L (QSERCS2125L) -10шт. в наборе
- 237) Quana Black NiTi Archwire INT 2125U (QSEBI2125U) -10шт. в наборе
- 238) Quana Black NiTi Archwire INT 2125L (QSEBI2125L) -10шт. в наборе
- 239) Quana Black NiTi Archwire NAT2 2125U (QSEBN2125U) -10шт. в наборе
- 240) Quana Black NiTi Archwire NAT2 2125L (QSEBN2125L) -10шт. в наборе

3.2 Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная Ebba Thermal NiTi, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 012U (ETUNI12U) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 2) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 012L (ETUNI12L) -10шт. в наборе
- 3) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 012U W/Pre-stop (ETUNI12US) -10шт. в наборе
- 4) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 012L W/Pre-stop (ETUNI12LS) -10шт. в наборе
- 5) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 012U (ETUNN12U) -10шт. в наборе
- 6) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 012L (ETUNN12L) -10шт. в наборе
- 7) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 012U W/Pre-stop (ETUNN12US) -10шт. в наборе
- 8) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 012L W/Pre-stop (ETUNN12LS) -10шт. в наборе
- 9) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 012U/L (ETUNU12) -10шт. в наборе
- 10) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 012U/L W/Pre-stop (ETUNU12S) -10шт. в наборе
- 11) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 012U (ETPNI12U) -10шт. в наборе
- 12) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 012L (ETPNI12L) -10шт. в наборе
- 13) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 012U W/Pre-stop (ETPNI12US) -10шт. в наборе
- 14) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 012L W/Pre-stop (ETPNI12LS) -10шт. в наборе
- 15) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 012U (ETPNN12U) -10шт. в наборе
- 16) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 012L (ETPNN12L) -10шт. в наборе
- 17) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 012U W/Pre-stop (ETPNN12US) -10шт. в наборе
- 18) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 012L W/Pre-stop (ETPNN12LS) -10шт. в наборе
- 19) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 012U/L (ETPNU12) -10шт. в наборе
- 20) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 012U/L W/Pre-stop (ETPNU12S) -10шт. в наборе
- 21) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 014U (ETUNI14U) -10шт. в наборе
- 22) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 014L (ETUNI14L) -10шт. в наборе
- 23) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 014U W/Pre-stop (ETUNI14US) -10шт. в наборе
- 24) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 014L W/Pre-stop (ETUNI14LS) -10шт. в наборе
- 25) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 014U (ETUNN14U) -10шт. в наборе
- 26) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 014L (ETUNN14L) -10шт. в наборе
- 27) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 014U W/Pre-stop (ETUNN14US) -10шт. в наборе
- 28) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 014L W/Pre-stop (ETUNN14LS) -10шт. в наборе
- 29) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 014U/L (ETUNU14) -10шт. в наборе
- 30) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 014U/L W/Pre-stop (ETUNU14S) -10шт. в наборе
- 31) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 014U (ETPNI14U) -10шт. в наборе
- 32) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 014L (ETPNI14L) -10шт. в наборе
- 33) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 014U W/Pre-stop (ETPNI14US) -10шт. в наборе
- 34) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 014L W/Pre-stop (ETPNI14LS) -10шт. в наборе
- 35) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 014U (ETPNN14U) -10шт. в наборе
- 36) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 014L (ETPNN14L) -10шт. в наборе
- 37) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 014U W/Pre-stop (ETPNN14US) -10шт. в наборе
- 38) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 014L W/Pre-stop (ETPNN14LS) -10шт. в наборе
- 39) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 014U/L (ETPNU14) -10шт. в наборе
- 40) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 014U/L W/Pre-stop (ETPNU14S) -10шт. в наборе
- 41) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 016U (ETUNI16U) -10шт. в наборе
- 42) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 016L (ETUNI16L) -10шт. в наборе
- 43) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 016U W/Pre-stop (ETUNI16US) -10шт. в наборе
- 44) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 016L W/Pre-stop (ETUNI16LS) -10шт. в наборе
- 45) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 016U (ETUNN16U) -10шт. в наборе
- 46) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 016L (ETUNN16L) -10шт. в наборе
- 47) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 016U W/Pre-stop (ETUNN16US) -10шт. в наборе
- 48) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 016L W/Pre-stop (ETUNN16LS) -10шт. в наборе
- 49) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 016 U/L (ETUNU16) -10шт. в наборе
- 50) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 016 U/L W/Pre-stop (ETUNU16S) -10шт. в наборе
- 51) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 016U (ETPNI16U) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 52) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 016L (ETPNI16L) -10шт. в наборе
- 53) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 016U W/Pre-stop (ETPNI16US) -10шт. в наборе
- 54) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 016L W/Pre-stop (ETPNI16LS) -10шт. в наборе
- 55) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 016U (ETPNN16U) -10шт. в наборе
- 56) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 016L (ETPNN16L) -10шт. в наборе
- 57) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 016U W/Pre-stop (ETPNN16US) -10шт. в наборе
- 58) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 016L W/Pre-stop (ETPNN16LS) -10шт. в наборе
- 59) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 016U/L (ETPNU16) -10шт. в наборе
- 60) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 016U/L W/Pre-stop (ETPNU16S) -10шт. в наборе
- 61) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 018U (ETUNI18U) -10шт. в наборе
- 62) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 018L (ETUNI18L) -10шт. в наборе
- 63) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 018U W/Pre-stop (ETUNI18US) -10шт. в наборе
- 64) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 018L W/Pre-stop (ETUNI18LS) -10шт. в наборе
- 65) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 018U (ETUNN18U) -10шт. в наборе
- 66) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 018L (ETUNN18L) -10шт. в наборе
- 67) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 018U W/Pre-stop (ETUNN18US) -10шт. в наборе
- 68) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 018L W/Pre-stop (ETUNN18LS) -10шт. в наборе
- 69) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 018U/L (ETUNU18) -10шт. в наборе
- 70) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 018U/L W/Pre-stop (ETUNU18S) -10шт. в наборе
- 71) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 018U (ETPNI18U) -10шт. в наборе
- 72) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 018L (ETPNI18L) -10шт. в наборе
- 73) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 018U W/Pre-stop (ETPNI18US) -10шт. в наборе
- 74) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 018L W/Pre-stop (ETPNI18LS) -10шт. в наборе
- 75) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 018U (ETPNN18U) -10шт. в наборе
- 76) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 018L (ETPNN18L) -10шт. в наборе
- 77) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 018U W/Pre-stop (ETPNN18US) -10шт. в наборе
- 78) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 018L W/Pre-stop (ETPNN18LS) -10шт. в наборе
- 79) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 018U/L (ETPNU18) -10шт. в наборе
- 80) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 018U/L W/Pre-stop (ETPNU18S) -10шт. в наборе
- 81) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 020U (ETUNI20U) -10шт. в наборе
- 82) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 020L (ETUNI20L) -10шт. в наборе
- 83) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 020U W/Pre-stop (ETUNI20US) -10шт. в наборе
- 84) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 020L W/Pre-stop (ETUNI20LS) -10шт. в наборе
- 85) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 020U (ETUNN20U) -10шт. в наборе
- 86) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 020L (ETUNN20L) -10шт. в наборе
- 87) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 020U W/Pre-stop (ETUNN20US) -10шт. в наборе
- 88) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 020L W/Pre-stop (ETUNN20LS) -10шт. в наборе
- 89) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 020U/L (ETUNU20) -10шт. в наборе
- 90) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 020U/L W/Pre-stop (ETUNU20S) -10шт. в наборе
- 91) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 020U (ETPNI20U) -10шт. в наборе
- 92) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 020L (ETPNI20L) -10шт. в наборе
- 93) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 020U W/Pre-stop (ETPNI20US) -10шт. в наборе
- 94) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 020L W/Pre-stop (ETPNI20LS) -10шт. в наборе
- 95) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 020U (ETPNN20U) -10шт. в наборе
- 96) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 020L (ETPNN20L) -10шт. в наборе
- 97) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 020U W/Pre-stop (ETPNN20US) -10шт. в наборе
- 98) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 020L W/Pre-stop (ETPNN20LS) -10шт. в наборе
- 99) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 020U/L (ETPNU20) -10шт. в наборе
- 100) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 020U/L W/Pre-stop (ETPNU20S) -10шт. в наборе
- 101) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1425U (ETUNI1425U) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 102) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1425L (ETUNI1425L) -10шт. в наборе
- 103) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1425U W/Pre-stop (ETUNI1425US) -10шт. в наборе
- 104) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1425L W/Pre-stop (ETUNI1425LS) -10шт. в наборе
- 105) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1425U (ETUNN1425U) -10шт. в наборе
- 106) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1425L (ETUNN1425L) -10шт. в наборе
- 107) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1425U W/Pre-stop (ETUNN1425US) -10шт. в наборе
- 108) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1425L W/Pre-stop (ETUNN1425LS) -10шт. в наборе
- 109) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1425U/L (ETUNU1425) -10шт. в наборе
- 110) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1425U/L W/Pre-stop (ETUNU1425S) -10шт. в наборе
- 111) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1425U (ETPNI1425U) -10шт. в наборе
- 112) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1425L (ETPNI1425L) -10шт. в наборе
- 113) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1425U W/Pre-stop (ETPNI1425US) -10шт. в наборе
- 114) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1425L W/Pre-stop (ETPNI1425LS) -10шт. в наборе
- 115) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1425U (ETPNN1425U) -10шт. в наборе
- 116) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1425L (ETPNN1425L) -10шт. в наборе
- 117) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1425U W/Pre-stop (ETPNN1425US) -10шт. в наборе
- 118) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1425L W/Pre-stop (ETPNN1425L) -10шт. в наборе
- 119) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1425U/L (ETPNU1425) -10шт. в наборе
- 120) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1425U/L W/Pre-stop (ETPNU1425S) -10шт. в наборе
- 121) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1616U (ETUNI1616U) -10шт. в наборе
- 122) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1616L (ETUNI1616L) -10шт. в наборе
- 123) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1616U W/Pre-stop (ETUNI1616US) -10шт. в наборе
- 124) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1616L W/Pre-stop (ETUNI1616LS) -10шт. в наборе
- 125) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1616U (ETUNN1616U) -10шт. в наборе
- 126) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1616L (ETUNN1616L) -10шт. в наборе
- 127) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1616U W/Pre-stop (ETUNN1616US) -10шт. в наборе
- 128) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1616L W/Pre-stop (ETUNN1616LS) -10шт. в наборе
- 129) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1616U/L (ETUNU1616) -10шт. в наборе
- 130) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1616U/L W/Pre-stop (ETUNU1616S) -10шт. в наборе
- 131) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1616U (ETPNI1616U) -10шт. в наборе
- 132) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1616L (ETPNI1616L) -10шт. в наборе
- 133) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1616U W/Pre-stop (ETPNI1616US) -10шт. в наборе
- 134) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1616L W/Pre-stop (ETPNI1616LS) -10шт. в наборе
- 135) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1616U (ETPNN1616U) -10шт. в наборе
- 136) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1616L (ETPNN1616L) -10шт. в наборе
- 137) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1616U W/Pre-stop (ETPNN1616US) -10шт. в наборе
- 138) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1616L W/Pre-stop (ETPNN1616LS) -10шт. в наборе
- 139) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1616U/L (ETPNU1616) -10шт. в наборе
- 140) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1616U/L W/Pre-stop (ETPNU1616S) -10шт. в наборе
- 141) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1622U (ETUNI1622U) -10шт. в наборе
- 142) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1622L (ETUNI1622L) -10шт. в наборе
- 143) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1622U W/Pre-stop (ETUNI1622US) -10шт. в наборе
- 144) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1622L W/Pre-stop (ETUNI1622LS) -10шт. в наборе
- 145) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1622U (ETUNN1622U) -10шт. в наборе
- 146) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1622L (ETUNN1622L) -10шт. в наборе
- 147) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1622U W/Pre-stop (ETUNN1622US) -10шт. в наборе
- 148) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1622L W/Pre-stop (ETUNN1622LS) -10шт. в наборе
- 149) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1622U/L (ETUNU1622) -10шт. в наборе
- 150) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1622U/L W/Pre-stop (ETUNU1622S) -10шт. в наборе
- 151) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1622U (ETPNI1622U) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 152) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1622L (ETPNI1622L) -10шт. в наборе
- 153) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1622U W/Pre-stop (ETPNI1622US) -10шт. в наборе
- 154) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1622L W/Pre-stop (ETPNI1622LS) -10шт. в наборе
- 155) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1622U (ETPNN1622U) -10шт. в наборе
- 156) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1622L (ETPNN1622L) -10шт. в наборе
- 157) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1622U W/Pre-stop (ETPNN1622US) -10шт. в наборе
- 158) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1622L W/Pre-stop (ETPNN1622LS) -10шт. в наборе
- 159) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1622U/L (ETPNU1622) -10шт. в наборе
- 160) Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1622U/L W/Pre-stop (ETPNU1622S) -10шт. в наборе
- 161) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1625U (ETUNI1625U) -10шт. в наборе
- 162) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1625L (ETUNI1625L) -10шт. в наборе
- 163) Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1625U W/Pre-stop (ETUNI1625US) -10шт. в наборе
- 164)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1625L W/Pre-stop (ETUNI1625LS) -10шт. в наборе
- 165)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1625U (ETUNN1625U) -10шт. в наборе
- 166)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1625L (ETUNN1625L) -10шт. в наборе
- 167)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1625U W/Pre-stop (ETUNN1625US) -10шт. в наборе
- 168)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1625L W/Pre-stop (ETUNN1625LS) -10шт. в наборе
- 169)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1625U/L (ETUNU1625) -10шт. в наборе
- 170)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1625U/L W/Pre-stop (ETUNU1625S) -10шт. в наборе
- 171)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1625U (ETPNI1625U) -10шт. в наборе
- 172)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1625L (ETPNI1625L) -10шт. в наборе
- 173)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1625U W/Pre-stop (ETPNI1625US) -10шт. в наборе
- 174)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1625L W/Pre-stop (ETPNI1625LS) -10шт. в наборе
- 175)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1625U (ETPNN1625U) -10шт. в наборе
- 176)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1625L (ETPNN1625L) -10шт. в наборе
- 177)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1625U W/Pre-stop (ETPNN1625US) -10шт. в наборе
- 178)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1625L W/Pre-stop (ETPNN1625LS) -10шт. в наборе
- 179)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1625U/L (ETPNU1625) -10шт. в наборе
- 180)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1625U/L W/Pre-stop (ETPNU1625S) -10шт. в наборе
- 181)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1725U (ETUNI1725U) -10шт. в наборе
- 182)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1725L (ETUNI1725L) -10шт. в наборе
- 183)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1725U W/Pre-stop (ETUNI1725US) -10шт. в наборе
- 184)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1725L W/Pre-stop (ETUNI1725LS) -10шт. в наборе
- 185)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1725U (ETUNN1725U) -10шт. в наборе
- 186)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1725L (ETUNN1725L) -10шт. в наборе
- 187)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1725U W/Pre-stop (ETUNN1725US) -10шт. в наборе
- 188)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1725L W/Pre-stop (ETUNN1725LS) -10шт. в наборе
- 189)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1725U/L (ETUNU1725) -10шт. в наборе
- 190)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1725U/L W/Pre-stop (ETUNU1725S) -10шт. в наборе
- 191)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1725U (ETPNI1725U) -10шт. в наборе
- 192)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1725L (ETPNI1725L) -10шт. в наборе
- 193)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1725U W/Pre-stop (ETPNI1725US) -10шт. в наборе
- 194)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1725L W/Pre-stop (ETPNI1725LS) -10шт. в наборе
- 195)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1725U (ETPNN1725U) -10шт. в наборе
- 196)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1725L (ETPNN1725L) -10шт. в наборе
- 197)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1725U W/Pre-stop (ETPNN1725US) -10шт. в наборе
- 198)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1725L W/Pre-stop (ETPNN1725LS) -10шт. в наборе
- 199)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1725U/L (ETPNN1725U) -10шт. в наборе
- 200)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1725U/L W/Pre-stop (ETPNN1725US) -10шт. в наборе
- 201)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1818U (ETUNI1818U) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 202)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1818L (ETUNI1818L) -10шт. в наборе
- 203)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1818U W/Pre-stop (ETUNI1818US) -10шт. в наборе
- 204)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1818L W/Pre-stop (ETUNI1818LS) -10шт. в наборе
- 205)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1818U (ETUNN1818U) -10шт. в наборе
- 206)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1818L (ETUNN1818L) -10шт. в наборе
- 207)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1818U W/Pre-stop (ETUNN1818US) -10шт. в наборе
- 208)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1818L W/Pre-stop (ETUNN1818LS) -10шт. в наборе
- 209)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1818U/L (ETUNU1818) -10шт. в наборе
- 210)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1818U/L W/Pre-stop (ETUNU1818S) -10шт. в наборе
- 211)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1818U (ETPNI1818U) -10шт. в наборе
- 212)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1818L (ETPNI1818L) -10шт. в наборе
- 213)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1818U W/Pre-stop (ETPNI1818US) -10шт. в наборе
- 214)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1818L W/Pre-stop (ETPNI1818LS) -10шт. в наборе
- 215)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1818U (ETPNN1818U) -10шт. в наборе
- 216)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1818L (ETPNN1818L) -10шт. в наборе
- 217)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1818U W/Pre-stop (ETPNN1818US) -10шт. в наборе
- 218)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1818L W/Pre-stop (ETPNN1818LS) -10шт. в наборе
- 219)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1818U/L (ETPNU1818) -10шт. в наборе
- 220)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1818U/L W/Pre-stop (ETPNU1818S) -10шт. в наборе
- 221)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1825U (ETUNI1825U) -10шт. в наборе
- 222)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1825L (ETUNI1825L) -10шт. в наборе
- 223)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1825U W/Pre-stop (ETUNI1825US) -10шт. в наборе
- 224)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1825L W/Pre-stop (ETUNI1825LS) -10шт. в наборе
- 225)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1825U (ETUNN1825U) -10шт. в наборе
- 226)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1825L (ETUNN1825L) -10шт. в наборе
- 227)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1825U W/Pre-stop (ETUNN1825US) -10шт. в наборе
- 228)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1825L W/Pre-stop (ETUNN1825LS) -10шт. в наборе
- 229)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1825U/L (ETUNU1825) -10шт. в наборе
- 230)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1825U/L W/Pre-stop (ETUNU1825S) -10шт. в наборе
- 231)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1825U (ETPNI1825U) -10шт. в наборе
- 232)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1825L (ETPNI1825L) -10шт. в наборе
- 233)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1825U W/Pre-stop (ETPNI1825US) -10шт. в наборе
- 234)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1825L W/Pre-stop (ETPNI1825LS) -10шт. в наборе
- 235)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1825U (ETPNN1825U) -10шт. в наборе
- 236)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1825L (ETPNN1825L) -10шт. в наборе
- 237)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1825U W/Pre-stop (ETPNN1825US) -10шт. в наборе
- 238)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1825L W/Pre-stop (ETPNN1825LS) -10шт. в наборе
- 239)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1825U/L (ETPNU1825) -10шт. в наборе
- 240)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1825U/L W/Pre-stop (ETPNU1825S) -10шт. в наборе
- 241)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1925U (ETUNI1925U) -10шт. в наборе
- 242)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1925L (ETUNI1925L) -10шт. в наборе
- 243)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1925U W/Pre-stop (ETUNI1925US) -10шт. в наборе
- 244)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 1925L W/Pre-stop (ETUNI1925LS) -10шт. в наборе
- 245)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1925U (ETUNN1925U) -10шт. в наборе
- 246)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1925L (ETUNN1925L) -10шт. в наборе
- 247)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1925U W/Pre-stop (ETUNN1925US) -10шт. в наборе
- 248)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 1925L W/Pre-stop (ETUNN1925LS) -10шт. в наборе
- 249)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1925U/L (ETUNU1925) -10шт. в наборе
- 250)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 1925U/L W/Pre-stop (ETUNU1925S) -10шт. в наборе
- 251)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1925U (ETPNI1925U) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 252)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1925L (ETPNI1925L) -10шт. в наборе
- 253)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1925U W/Pre-stop (ETPNI1925US) -10шт. в наборе
- 254)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 1925L W/Pre-stop (ETPNI1925LS) -10шт. в наборе
- 255)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1925U (ETPNN1925U) -10шт. в наборе
- 256)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1925L (ETPNN1925L) -10шт. в наборе
- 257)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1925U W/Pre-stop (ETPNN1925US) -10шт. в наборе
- 258)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 1925L W/Pre-stop (ETPNN1925LS) -10шт. в наборе
- 259)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1925U/L (ETPNU1925) -10шт. в наборе
- 260)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 1925U/L W/Pre-stop (ETPNU1925S) -10шт. в наборе
- 261)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2020U (ETUNI2020U) -10шт. в наборе
- 262)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2020L (ETUNI2020L) -10шт. в наборе
- 263)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2020U W/Pre-stop (ETUNI2020US) -10шт. в наборе
- 264)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2020L W/Pre-stop (ETUNI2020LS) -10шт. в наборе
- 265)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2020U (ETUNN2020U) -10шт. в наборе
- 266)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2020L (ETUNN2020L) -10шт. в наборе
- 267)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2020U W/Pre-stop (ETUNN2020US) -10шт. в наборе
- 268)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2020L W/Pre-stop (ETUNN2020LS) -10шт. в наборе
- 269)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 2020U/L (ETUNU2020) -10шт. в наборе
- 270)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 2020U/L W/Pre-stop (ETUNU2020S) -10шт. в наборе
- 271)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2020U (ETPNI2020U) -10шт. в наборе
- 272)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2020L (ETPNI2020L) -10шт. в наборе
- 273)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2020U W/Pre-stop (ETPNI2020US) -10шт. в наборе
- 274)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2020L W/Pre-stop (ETPNI2020LS) -10шт. в наборе
- 275)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2020U (ETPNN2020U) -10шт. в наборе
- 276)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2020L (ETPNN2020L) -10шт. в наборе
- 277)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2020U W/Pre-stop (ETPNN2020US) -10шт. в наборе
- 278)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2020L W/Pre-stop (ETPNN2020LS) -10шт. в наборе
- 279)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 2020U/L (ETPNU2020) -10шт. в наборе
- 280)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 2020U/L W/Pre-stop (ETPNU2020S) -10шт. в наборе
- 281)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2125U (ETUNI2125U) -10шт. в наборе
- 282)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2125L (ETUNI2125L) -10шт. в наборе
- 283)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2125U W/Pre-stop (ETUNI2125US) -10шт. в наборе
- 284)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire INT 2125L W/Pre-stop (ETUNI2125LS) -10шт. в наборе
- 285)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2125U (ETUNN2125U) -10шт. в наборе
- 286)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2125L (ETUNN2125L) -10шт. в наборе
- 287)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2125U W/Pre-stop (ETUNN2125US) -10шт. в наборе
- 288)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire NAT2 2125L W/Pre-stop (ETUNN2125LS) -10шт. в наборе
- 289)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 2125U/L (ETUNU2125) -10шт. в наборе
- 290)Ebba ThermalUltra NiTi Archwire UNV 2125U/L W/Pre-stop (ETUNU2125S) -10шт. в наборе
- 291)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2125U (ETPNI2125U) -10шт. в наборе
- 292)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2125L (ETPNI2125L) -10шт. в наборе
- 293)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2125U W/Pre-stop (ETPNI2125US) -10шт. в наборе
- 294)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire INT 2125L W/Pre-stop (ETPNI2125LS) -10шт. в наборе
- 295)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2125U (ETPNN2125U) -10шт. в наборе
- 296)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2125L (ETPNN2125L) -10шт. в наборе
- 297)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2125U W/Pre-stop (ETPNN2125US) -10шт. в наборе
- 298)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire NAT2 2125L W/Pre-stop (ETPNN2125LS) -10шт. в наборе
- 299)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 2125U/L (ETPNU2125) -10шт. в наборе
- 300)Ebba ThermalPlus NiTi Archwire UNV 2125U/L W/Pre-stop (ETPNU2125S) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

3.3 Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная трехсиловая ThermalThree NiTi, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 016U (TTNN16U) -10шт. в наборе
- 2) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 016L (TTNN16L) -10шт. в наборе
- 3) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 016U W/Pre-stop (TTNN16US) -10шт. в наборе
- 4) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 016L W/Pre-stop (TTNN16LS) -10шт. в наборе
- 5) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 018U (TTNN18U) -10шт. в наборе
- 6) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 018L (TTNN18L) -10шт. в наборе
- 7) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 018U W/Pre-stop (TTNN18US) -10шт. в наборе
- 8) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 018L W/Pre-stop (TTNN18LS) -10шт. в наборе
- 9) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1616U (TTNN1616U) -10шт. в наборе
- 10) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1616L (TTNN1616L) -10шт. в наборе
- 11) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1616U W/Pre-stop (TTNN1616US) -10шт. в наборе
- 12) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1616L W/Pre-stop (TTNN1616LS) -10шт. в наборе
- 13) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1622U (TTNN1622U) -10шт. в наборе
- 14) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1622L (TTNN1622L) -10шт. в наборе
- 15) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1622U W/Pre-stop (TTNN1622US) -10шт. в наборе
- 16) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1622L W/Pre-stop (TTNN1622LS) -10шт. в наборе
- 17) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1725U (TTNN1725U) -10шт. в наборе
- 18) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1725L (TTNN1725L) -10шт. в наборе
- 19) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1725U W/Pre-stop (TTNN1725US) -10шт. в наборе
- 20) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1725L W/Pre-stop (TTNN1725LS) -10шт. в наборе
- 21) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1818U (TTNN1818U) -10шт. в наборе
- 22) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1818L (TTNN1818L) -10шт. в наборе
- 23) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1818U W/Pre-stop (TTNN1818US) -10шт. в наборе
- 24) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1818L W/Pre-stop (TTNN1818LS) -10шт. в наборе
- 25) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1825U (TTNN1825U) -10шт. в наборе
- 26) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1825L (TTNN1825L) -10шт. в наборе
- 27) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1825U W/Pre-stop (TTNN1825US) -10шт. в наборе
- 28) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1825L W/Pre-stop (TTNN1825LS) -10шт. в наборе
- 29) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1925U (TTNN1925U) -10шт. в наборе
- 30) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1925L (TTNN1925L) -10шт. в наборе
- 31) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1925U W/Pre-stop (TTNN1925US) -10шт. в наборе
- 32) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 1925L W/Pre-stop (TTNN1925LS) -10шт. в наборе
- 33) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2020U (TTNN2020U) -10шт. в наборе
- 34) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2020L (TTNN2020L) -10шт. в наборе
- 35) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2020U W/Pre-stop (TTNN2020US) -10шт. в наборе
- 36) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2020L W/Pre-stop (TTNN2020LS) -10шт. в наборе
- 37) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2125U (TTNN2025U) -10шт. в наборе
- 38) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2125L (TTNN2025L) -10шт. в наборе
- 39) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2125U W/Pre-stop (TTNN2025US) -10шт. в наборе
- 40) ThermalThree NiTi Archwire NAT2 2125L W/Pre-stop (TTNN2025LS) -10шт. в наборе

3.4 Дуга ортодонтическая стальная Sera Solid Stainless Steel Archwire, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 012U (SSI12U) -10шт. в наборе
- 2) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 012L (SSI12L) -10шт. в наборе
- 3) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 012U (SSN12U) -10шт. в наборе
- 4) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 012L (SSN12L) -10шт. в наборе
- 5) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 012U/L (SSU12) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 6) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 012U (SSSTD12U) -10шт. в наборе
- 7) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 012L (SSSTD12L) -10шт. в наборе
- 8) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 014U (SSI14U) -10шт. в наборе
- 9) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 014L (SSI14L) -10шт. в наборе
- 10) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 014U (SSN14U) -10шт. в наборе
- 11) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 014L (SSN14L) -10шт. в наборе
- 12) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 014U/L (SSU14) -10шт. в наборе
- 13) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 014U (SSSTD14U) -10шт. в наборе
- 14) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 014L (SSSTD14L) -10шт. в наборе
- 15) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 016U (SSI16U) -10шт. в наборе
- 16) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 016L (SSI16L) -10шт. в наборе
- 17) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 016U (SSN16U) -10шт. в наборе
- 18) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 016L (SSN16L) -10шт. в наборе
- 19) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 016U/L (SSU16) -10шт. в наборе
- 20) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 016U (SSSTD16U) -10шт. в наборе
- 21) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 016L (SSSTD16L) -10шт. в наборе
- 22) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 018U (SSI18U) -10шт. в наборе
- 23) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 018L (SSI18L) -10шт. в наборе
- 24) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 018U (SSN18U) -10шт. в наборе
- 25) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 018L (SSN18L) -10шт. в наборе
- 26) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 018U/L (SSU18) -10шт. в наборе
- 27) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 018U (SSSTD18U) -10шт. в наборе
- 28) Sera Solid Stainless Steel Archwire STD 018L (SSSTD18L) -10шт. в наборе
- 29) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 020U (SSI20U) -10шт. в наборе
- 30) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 020L (SSI20L) -10шт. в наборе
- 31) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 020U (SSN20U) -10шт. в наборе
- 32) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 020L (SSN20L) -10шт. в наборе
- 33) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 020U/L (SSU20) -10шт. в наборе
- 34) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1616U (SSI1616U) -10шт. в наборе
- 35) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1616L (SSI1616L) -10шт. в наборе
- 36) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1616U (SSN1616U) -10шт. в наборе
- 37) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1616L (SSN1616L) -10шт. в наборе
- 38) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1616U/L (SSU1616) -10шт. в наборе
- 39) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1622U (SSI1622U) -10шт. в наборе
- 40) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1622L (SSI1622L) -10шт. в наборе
- 41) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1622U (SSN1622U) -10шт. в наборе
- 42) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1622L (SSN1622L) -10шт. в наборе
- 43) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1622U/L (SSU1622) -10шт. в наборе
- 44) Sera Solid Stainless Steel Archwire Brass Post 1622 (SSBP1622) -10шт. в наборе
- 45) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1717U (SSI1717U) -10шт. в наборе
- 46) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1717L (SSI1717L) -10шт. в наборе
- 47) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1717U (SSN1717U) -10шт. в наборе
- 48) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1717L (SSN1717L) -10шт. в наборе
- 49) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1717U/L (SSU1717) -10шт. в наборе
- 50) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1722U (SSI1722U) -10шт. в наборе
- 51) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1722L (SSI1722L) -10шт. в наборе
- 52) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1722U (SSN1722U) -10шт. в наборе
- 53) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1722L (SSN1722L) -10шт. в наборе
- 54) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1722U/L (SSU1722) -10шт. в наборе
- 55) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1725U (SSI1725U) -10шт. в наборе
- 56) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1725L (SSI1725L) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 57) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1725U (SSN1725U) -10шт. в наборе
- 58) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1725L (SSN1725L) -10шт. в наборе
- 59) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1725U/L (SSU1725) -10шт. в наборе
- 60) Sera Solid Stainless Steel Archwire 4 Keyhole 1725 (SS4K1725) -10шт. в наборе
- 61) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1818U (SSI1818U) -10шт. в наборе
- 62) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1818L (SSI1818L) -10шт. в наборе
- 63) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1818U (SSN1818U) -10шт. в наборе
- 64) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1818L (SSN1818L) -10шт. в наборе
- 65) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1818U/L (SSU1818) -10шт. в наборе
- 66) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1825U (SSI1825U) -10шт. в наборе
- 67) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1825L (SSI1825L) -10шт. в наборе
- 68) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1825U (SSN1825U) -10шт. в наборе
- 69) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1825L (SSN1825L) -10шт. в наборе
- 70) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1825U/L (SSU1825) -10шт. в наборе
- 71) Sera Solid Stainless Steel Archwire T-Loop 1825 (SSTL1825) -10шт. в наборе
- 72) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1925U (SSI1925U) -10шт. в наборе
- 73) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 1925L (SSI1925L) -10шт. в наборе
- 74) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1925U (SSN1925U) -10шт. в наборе
- 75) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 1925L (SSN1925L) -10шт. в наборе
- 76) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 1925U/L (SSU1925) -10шт. в наборе
- 77) Sera Solid Stainless Steel Archwire 2 Keyhole 1925 (SS2K1925) -10шт. в наборе
- 78) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 2020U (SSI2020U) -10шт. в наборе
- 79) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 2020L (SSI2020L) -10шт. в наборе
- 80) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 2020U (SSN2020U) -10шт. в наборе
- 81) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 2020L (SSN2020L) -10шт. в наборе
- 82) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 2020U/L (SSU2020) -10шт. в наборе
- 83) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 2125U (SSI2125U) -10шт. в наборе
- 84) Sera Solid Stainless Steel Archwire INT 2125L (SSI2125L) -10шт. в наборе
- 85) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 2125U (SSN2125U) -10шт. в наборе
- 86) Sera Solid Stainless Steel Archwire NAT2 2125L (SSN2125L) -10шт. в наборе
- 87) Sera Solid Stainless Steel Archwire UNV 2125U/L (SSU2125) -10шт. в наборе

3.5 Дуга ортодонтическая стальная Stainless Steel Strand Archwire, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Stainless Steel 3-Strand Twist Wire 0155" (SS3STW155) -10шт. в наборе
- 2) Stainless Steel 6-Strand Coaxial Wire 0155" (SS6STW155) -10шт. в наборе
- 3) Stainless Steel 3-Strand Twist Wire 0175" (SS3STW175) -10шт. в наборе
- 4) Stainless Steel 6-Strand Coaxial Wire 0175" (SS6STW175) -10шт. в наборе
- 5) Stainless Steel 3-Strand Twist Wire 0195" (SS3STW195) -10шт. в наборе
- 6) Stainless Steel 6-Strand Coaxial Wire 0195" (SS6STW195) -10шт. в наборе
- 7) Stainless Steel 3-Strand Twist Wire 0215" (SS3STW215) -10шт. в наборе
- 8) Stainless Steel 6-Strand Coaxial Wire 0215" (SS6STW215) -10шт. в наборе

3.6 Дуга ортодонтическая стальная Stainless Steel Straight Length, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Stainless Steel Straight Length 012" (SSSL12) -20шт. в наборе
- 2) Stainless Steel Straight Length 014" (SSSL14) -20шт. в наборе
- 3) Stainless Steel Straight Length 016" (SSSL16) -20шт. в наборе
- 4) Stainless Steel Straight Length 018" (SSSL18) -20шт. в наборе
- 5) Stainless Steel Straight Length 020" (SSSL20) -20шт. в наборе
- 6) Stainless Steel Straight Length 016"x016" (SSSL1616) -20шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 7) Stainless Steel Straight Length 016"x022" (SSSL1622) -20шт. в наборе
- 8) Stainless Steel Straight Length 017"x022" (SSSL1722) -20шт. в наборе
- 9) Stainless Steel Straight Length 017"x025" (SSSL1725) -20шт. в наборе
- 10) Stainless Steel Straight Length 018"x018" (SSSL1818) -20шт. в наборе
- 11) Stainless Steel Straight Length 018"x022" (SSSL1822) -20шт. в наборе
- 12) Stainless Steel Straight Length 018"x025" (SSSL1825) -20шт. в наборе
- 13) Stainless Steel Straight Length 019"x025" (SSSL1925) -20шт. в наборе
- 14) Stainless Steel Straight Length 021"x025" (SSSL2125) -20шт. в наборе
- 15) Stainless Steel Straight Length 028" Retainer (SSSLR28) -10шт. в наборе
- 16) Stainless Steel Straight Length 030" Retainer (SSSLR30) -10шт. в наборе
- 17) Stainless Steel Straight Length 032" Retainer (SSSLR32) -10шт. в наборе
- 18) Stainless Steel Straight Length 036" Retainer (SSSLR36) -10шт. в наборе
- 19) Stainless Steel Straight Length 040" Retainer (SSSLR40) -10шт. в наборе
- 20) Stainless Steel Straight Length 045" Retainer (SSSLR45) -10шт. в наборе

3.7 Дуга ортодонтическая титаномолибденовая Beta Titanium Archwire, в наборе.

Варианты исполнения:

- 1) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 014U (TBCANI14U) -10шт. в наборе
- 2) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 014L (TBCANI14L) -10шт. в наборе
- 3) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 014U (TBCANN14U) -10шт. в наборе
- 4) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 014L (TBCANN14L) -10шт. в наборе
- 5) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 014U/L (TBCANU14) -10шт. в наборе
- 6) Tilda BIII/CNA/TMA Length 014" (TBCANL14) -10шт. в наборе
- 7) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 016U (TBCANI16U) -10шт. в наборе
- 8) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 016L (TBCANI16L) -10шт. в наборе
- 9) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 016U (TBCANN16U) -10шт. в наборе
- 10) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 016L (TBCANN16L) -10шт. в наборе
- 11) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 016U/L (TBCANU16) -10шт. в наборе
- 12) Tilda BIII/CNA/TMA Length 016" (TBCANL16) -10шт. в наборе
- 13) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 018U (TBCANI18U) -10шт. в наборе
- 14) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 018L (TBCANI18L) -10шт. в наборе
- 15) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 018U (TBCANN18U) -10шт. в наборе
- 16) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 018L (TBCANN18L) -10шт. в наборе
- 17) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 018U/L (TBCANU16) -10шт. в наборе
- 18) Tilda BIII/CNA/TMA Length 018" (TBCANL18) -10шт. в наборе
- 19) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 020U (TBCANI20U) -10шт. в наборе
- 20) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 020L (TBCANI20L) -10шт. в наборе
- 21) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 020U (TBCANN20U) -10шт. в наборе
- 22) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 020L (TBCANN20L) -10шт. в наборе
- 23) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 020U/L (TBCANU16) -10шт. в наборе
- 24) Tilda BIII/CNA/TMA Length 027" (TBCANL27) -10шт. в наборе
- 25) Tilda BIII/CNA/TMA Length 032" (TBCANL32) -10шт. в наборе
- 26) Tilda BIII/CNA/TMA Length 036" (TBCANL36) -10шт. в наборе
- 27) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1616U (TBCANI1616U) -10шт. в наборе
- 28) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1616L (TBCANI1616L) -10шт. в наборе
- 29) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1616U (TBCANN1616U) -10шт. в наборе
- 30) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1616L (TBCANN1616L) -10шт. в наборе
- 31) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 1616U/L (TBCANNU1616) -10шт. в наборе
- 32) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1622U (TBCANI1622U) -10шт. в наборе
- 33) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1622L (TBCANI1616L) -10шт. в наборе

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- 34) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1622U (TBCANN1616U) -10шт. в наборе
- 35) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1622L (TBCANN1616L) -10шт. в наборе
- 36) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 1622U/L (TBCANU1616) -10шт. в наборе
- 37) Tilda BIII/CNA/TMA Length 016x22" (TBCANL1622) -10шт. в наборе
- 38) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1725U (TBCANI1725U) -10шт. в наборе
- 39) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1725L (TBCANI1725L) -10шт. в наборе
- 40) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1725U (TBCANN1725U) -10шт. в наборе
- 41) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1725L (TBCANN1725L) -10шт. в наборе
- 42) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 1725U/L (TBCANU1725) -10шт. в наборе
- 43) Tilda BIII/CNA/TMA Length 017x25" (TBCANL1725) -10шт. в наборе
- 44) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1818U (TBCANI1818U) -10шт. в наборе
- 45) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1818L (TBCANI1818L) -10шт. в наборе
- 46) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1818U (TBCANN1818U) -10шт. в наборе
- 47) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1818L (TBCANN1818L) -10шт. в наборе
- 48) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 1818U/L (TBCANU1818) -10шт. в наборе
- 49) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1825U (TBCANI1825U) -10шт. в наборе
- 50) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1825L (TBCANI1825L) -10шт. в наборе
- 51) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1825U (TBCANN1825U) -10шт. в наборе
- 52) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1825L (TBCANN1825L) -10шт. в наборе
- 53) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 1825U/L (TBCANU1825) -10шт. в наборе
- 54) Tilda BIII/CNA/TMA Length 018x25" (TBCANL1825) -10шт. в наборе
- 55) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1925U (TBCANI1925U) -10шт. в наборе
- 56) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 1925L (TBCANI1925L) -10шт. в наборе
- 57) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1925U (TBCANN1925U) -10шт. в наборе
- 58) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 1925L (TBCANN1925L) -10шт. в наборе
- 59) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 1925U/L (TBCANU1925) -10шт. в наборе
- 60) Tilda BIII/CNA/TMA Length 019x25" (TBCANL1925) -10шт. в наборе
- 61) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 2020U (TBCANI2020U) -10шт. в наборе
- 62) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 2020L (TBCANI2020L) -10шт. в наборе
- 63) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 2020U (TBCANN2020U) -10шт. в наборе
- 64) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 2020L (TBCANN2020L) -10шт. в наборе
- 65) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 2020U/L (TBCANU2020) -10шт. в наборе
- 66) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 2125U (TBCANI2125U) -10шт. в наборе
- 67) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire INT 2125L (TBCANI2125L) -10шт. в наборе
- 68) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 2125U (TBCANN2125U) -10шт. в наборе
- 69) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire NAT2 2125L (TBCANN2125L) -10шт. в наборе
- 70) Tilda BIII/CNA/TMA Archwire UNV 2125U/L (TBCANU2125) -10шт. в наборе

3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Исправление очевидной неровности зубов, а также неправильного прикуса.

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения (далее по тексту: **брекеты, брекет –система, ортодонтические аппараты**), предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций.

Предназначены для использования только подготовленными клиницистами (врачами - ортодонтами) в ортодонтии. Используются единожды, только в одной процедуре.

Брекеты разработаны для комфортного, безопасного, эффективного и простого использования ортодонтом, обеспечивающие полный контроль во время использования. Представлены различной конфигурации на выбор для врача - ортодонта.

Область применения

Система ортодонтическая регулируемая - это ортодонтическая система, собранная в ортодонтический аппарат, который служит для исправления аномалий прикуса, оказывающая минимальную нагрузку на зубы.

1) Брекет керамический самолигирующийся Genius C

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

2) Брекет керамический самолигирующийся Genius C 2

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

3) Брекет металлический самолигирующийся Genius System

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

4) Брекет металлический самолигирующийся Genius 2 System

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

5) Брекет металлический самолигирующий Heimas mini

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

6) Брекет металлический EPS SS Bracket

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

7) Брекет металлический Zeemas A Metal Bracket

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

8) Брекет керамический Zeemas C Ceramic Bracket

Изделия, прикрепляемые непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Изготавливаются из металла, циркония или композитных материалов.

Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций(аппаратов).

Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

9) Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE

Изделия ортодонтические предназначены для воздействия на форму и/или функцию зубочелюстной системы. Применяются при изготовлении съемных и несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

10) Дуги ортодонтические

Изделия ортодонтические предназначены для воздействия на форму и/или функцию зубочелюстной системы. Применяются при изготовлении съемных и несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Система ортодонтическая регулируемая - это ортодонтическая система, собранная в ортодонтический аппарат, который служит для исправления очевидной неровности зубов, а также неправильного прикуса, оказывающую минимальную нагрузку на зубы.

Система ортодонтическая регулируемая не может являться полностью готовым к использованию комплектом изделий, включающим все элементы необходимые для установки. В различных клинических случаях, у разных пациентов, существует необходимость поставки определенных частей системы, представленных в наборах, которые образуют совокупно -персональный комплект частей системы.

Все элементы ортодонтической системы «Система ортодонтическая регулируемая в наборах» взаимно совместимы.


▲ **Опасные комбинации отсутствуют.**

Все элементы ортодонтической системы только для одноразового применения! Не пытайтесь использовать элементы системы повторно!

Не содержит лекарственных средств, материалов животного и (или) человеческого происхождения;

Потенциальным потребителем продукта является врач-ортодонт.

Брекеты собираются в ортодонтический аппарат оказывающий нагрузку на каждый зуб в заданном направлении. Это процесс продолжительного воздействия. Нагрузка со временем ослабевает, если есть необходимость ее изменить, врач –ортодонт это производит при помощи замков-трубок, переместив проволоку и зафиксировав в новом положении. Возможна установка межчелюстных тяг, пружин на открытие и дополнительных элементов в зависимости от необходимого лечения.

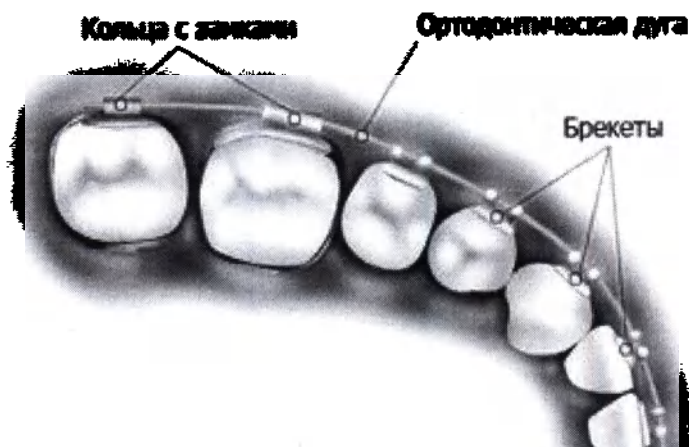

Традиционные (обычные) брекет-системы характеризуются тем, что проволочная дуга, которая собственно и выравнивает зубы, привязывается к ним с помощью специальных резинок или металлических проволочек. Самолигирующим брекетам не нужны никакие резинки и проволочки для привязывания дуги. В их конструкцию входит собственный специальный механизм удержания дуги. Это привело к снижению трения при перемещении зубов в сотни раз. Благодаря низкому трению можно использовать слабые силы для перемещения зубов. Зубы

очень благодарно реагируют на использование слабых сил и перемещаются значительно быстрее.

Пассивное самолигирование подразумевает наличие в брекете собственного механизма (специальной крышки) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур.

Пассивность означает, что крышка не оказывает активного давления на проволочную дугу в направлении дна паза брекета. Это отличает пассивное самолигирование от активных систем, в которых дуга прижата закрывающим механизмом к дну паза. Пассивный самолигирующий брекет в закрытом виде можно сравнить со щечной трубкой. Таким образом, в брекетах поддерживается очень низкий (по сравнению с традиционными и активными самолигирующими брекет-системами) уровень трения, позволяющий использовать для перемещения зубов физиологические, слабые силы. Это благоприятно воздействует на костную ткань, ткани пародонта, позволяя гораздо реже прибегать к удалению зубов и достигать лучших результатов при ортодонтическом лечении. Низкое трение облегчает перемещение зубов и ускоряет лечение минимум на 25%, позволяя при этом увеличивать интервалы между посещениями до 8—10 недель, значительно сокращая число визитов пациента.

Снижается уровень дискомфорта пациента во время лечения, а также риск развития осложнений. Применение слабых сил дает возможность работать в союзе с мышцами губ, щек и языка. Это значительно упрощает механику лечения, позволяет отказаться от большинства дополнительных приспособлений.

1) Брекет керамический самолигирующий Genius C

Керамические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

2) Брекет керамический самолигирующий Genius C 2

Керамические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

3) Брекет металлический самолигирующий Genius System

Металлические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

4) Брекет металлический самолигирующий Genius 2 System

Металлические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

5) Брекеты металлические самолигирующие Helmas mini

Металлические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

6) Брекеты металлические EPS SS Bracket

Металлические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

7) Брекеты металлические Zeemas A Metal Bracket

Металлические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

8) Брекеты керамические Zeemas C Ceramic Bracket

Керамические устройства предназначены для присоединения к зубу с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

9) Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE

Щечные замки-трубки предназначены для установки на моляры с целью удержания ортодонтической дуги, используемой для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

10) Дуги ортодонтические

Дуги ортодонтические используются для оказания давления на зуб с тем, чтобы изменить положение зуба. Применяются при изготовлении съемных и несъемных ортодонтических конструкций. Предназначены для использования только квалифицированным и юридически компетентным персоналом при ортодонтическом и одонтологическом лечении.

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Исправление очевидной неровности зубов, а также неправильного прикуса.

Показаны к применению при следующих отклонениях в развитии челюстей:

- деформация прикуса
- скученность зубов.
- избыточное развитие одной из челюстей относительно другой.
- дистопия — искривление или неправильное положение одного или нескольких зубов в ряду.
- увеличенные расстояния между зубами.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Все патологические состояния, как местные, так и системные, которые являются противопоказаниями к ортодонтическому лечению, должны быть признаны действительными противопоказаниями для применения вышеуказанных изделий

Все противопоказания для брекетов можно разделить на два типа: абсолютные (их нельзя использовать никогда); временные (их запрещено применять временно).

Абсолютные противопоказания для установки брекетов подразумевают отказ от такого вида коррекции прикуса и искривления зубов навсегда или до устранения причины, которая мешает лечению:

- отсутствие большого количества зубов.
- аномалии костной системы. Процесс установки брекетов подразумевает обследование на предмет крепости костей, зубной эмали.;
- эндокринные и иммунные заболевания, включая СПИД. Такого рода расстройства могут создавать риск полной потери зуба после установки брекетов.
- сахарный диабет. Некоторые формы сахарного диабета также не позволяют использовать брекеты.
- онкология. Этот вид заболевания, подразумевающий наличие злокачественных опухолей, требует особой осторожности в выборе любых медицинских вмешательств.
- психические заболевания (эпилепсия, психозы, шизофрения). Здесь подразумеваются расстройства, которые приводят к пониженному самоконтролю. В такой ситуации пациент может пожелать самостоятельно избавиться от мешающих посторонних предметов во рту.
- ряд других заболеваний, которые считаются абсолютным противопоказанием для установки брекетов. К ним относятся туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы со свертываемостью крови и т.д.
- *Относительные*: К относительным противопоказаниям для применения брекетов относятся такие заболевания и состояния пациента, которые можно вылечить перед началом коррекции прикуса.
- пародонтит и пародонтоз, а также другие воспалительные заболевания десен. При таком состоянии десен зубы слабо держатся в лунках, легко расшатываются.
- аллергические реакции. Если аллергия есть на какой-то материал, можно выбрать другие варианты.
- бруксизм, заболевание, основным симптомом которого является ночной скрежет зубов. Как правило, пациент даже не осознает того, что у него есть это расстройство. Однако при его наличии могут срабатывать рефлексы по сильному сжиманию челюстей, что приводит к повреждению брекетов, а в некоторых ситуациях даже к травмам языка и десен.
- болезни височных и челюстных суставов. Этот вид заболеваний может препятствовать правильному положению брекетов.
- плохая гигиена полости рта. Брекеты создают дополнительные сложности с гигиеной зубов и десен.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Стоматологи обязаны учитывать противопоказания, побочные эффекты, осложнения и взаимодействия в оценке пациента и использования изделия, которые могут применяться при ортодонтическом лечении и должны информировать пациентов о преимуществах и возможных побочных эффектах или осложнениях.

- Болевые ощущения и дискомфорт.

Рекомендуется принимать анальгетики в этот период, чтобы избавиться от боли и дискомфорта. Побочные эффекты проявляются не так уж часто и связаны не так с самим фактом ношения брекетов, как с пренебрежением гигиеной, недобросовестным выполнением рекомендаций, индивидуальными особенностями организма или же недолеченными перед установкой брекет системы заболеваниями зубов.

- Ослабление эмали.

Под давлением конструкции в эмали зубов возможны необратимые изменения, которые часто приводят к кариозным поражениям, чувствительности зубов или изменениям цвета. Именно поэтому зубная эмаль в период ношения брекетов требует особой защиты - тщательной чистки, избегания механической нагрузки, ополаскивания фторсодержащими жидкостями, регулярной проверки у стоматолога.

- Болезни десен. Гингивит и пародонтит.

Так как коррекция прикуса - это все-таки постоянное давление на десны. Пренебрежение чисткой зубов с брекетами в разы увеличивает риск подобных заболеваний. Если десны все же воспалены, иногда приходится прервать лечение.

- Аллергические реакции.

Перед установкой брекетов врач должен поинтересоваться, есть ли у пациента аллергия на металлы, но чаще всего аллергия проявляется уже в процессе ношения брекетов. Ее симптомы могут быть неприятными и даже опасными, вплоть до астмы, отеков, болезненных язвочек во рту. С такими симптомами немедленно обращаться к врачу и, возможно, прекратить ношение брекет-системы.

8. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Все элементы ортодонтической системы только для одноразового применения!
Не пытайтесь использовать элементы системы повторно!**



Все элементы Брекет-системы поставляются нестерильными, требуется обработка перед применением 70% этиловым спиртом с полным погружением в раствор. На территории Российской Федерации рекомендуется проводить дезинфекцию согласно

документа:

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (МУ 287-113)., после чего ополаскиваются бидистиллированной водой. Порядок обработки отражен в вышеуказанном документе.



Для проведения процедуры установки брекет-систем могут быть допущены только квалифицированные сотрудники стоматологических клиник. Которые проходили обучение и знают принципы работы по установке брекет-систем.

Ниже приведенная инструкция описывает процесс в общем случае.

Для каждого отдельного случая/пациента, врачом должна быть определена собственная методика или определены опасности, которые врач должен избежать при установке брекет-системы.

Процедуры установки и снятия брекет-системы должны проводиться в хорошо оборудованных стоматологических кабинетах.

Температура в помещении должна быть в пределах от +10 до +35 °C

Влажность в помещении не должна превышать 90%

Атмосферное давление от 5 кПа до 105 кПа.

Температура эксплуатации брекет –системы в ротовой полости человека от +10 до +45 °C. (номинальные значения температуры от 32 до 42 °C категория Т6 согласно ГОСТ Р 50444-92)



Пациент должен быть проинструктирован врачом ортодонтом об обстоятельствах при которых необходимо обратиться к медицинскому работнику.

- Перед установкой брекетов необходимо провести чистку зубов от налёта и зубного камня.
- При проведении процедуры установки брекетов, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к зубам пациента, при помощи специализированных инструментов.
- Для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью, зуб предварительно полируется.
- Необходимо тщательно проверить каждый зуб на предмет любого существующего повреждения эмали, убедитесь в его отсутствии.
- Для очистки эмали используйте полировочную пасту не содержащую фтор. Изолируйте зуб для предотвращения повторного загрязнения.
- После полировки нанесите 1-2 капли травящего геля на поверхность зуба, выдержите 1 минуту на постоянных зубах и 2 минуты на молочных зубах. При применении на пораженных флюорозом зубах гель рекомендуется выдержать более длительное время.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Смойте водой и высушите полностью поверхность зуба с помощью воздуха. Протравленная поверхность зуба должна иметь матовый белый цвет. Если поверхность не матовая, то следует повторить процедуру протравки и выдержать гель еще в течение 1 минуты.
- А) подготовка коронок из драг металла
Обработайте коронку алюминиевой пескоструйкой или другим способом. Тщательно протрите и высушите, затем нанесите тонкий слой праймера для драг металла.
- Б) подготовка поверхности керамических или полимерных коронок.
Обработайте коронку алюминиевой пескоструйкой или другим способом. Тщательно протрите и высушите, затем нанесите тонкий слой праймера для керамики.
- Затем нанесите тонкий слой праймера на основание брекета и на протравленную поверхность зуба. Выдавите небольшое количество адгезива из шприца на основание брекета.
- Наложите брекеты на зуб под давлением с небольшой ротацией. Установите брекеты в правильном положении. Брекеты на зубе должны занимать строго определенное положение. Для определения этого положения врач должен использовать специальный инструмент. Для лучшего склеивания небольшое количество адгезива должно вытекать на периферию из под основания брекета, которое может быть удалено специальным инструментом.
- Когда брекеты будут установлены в правильной позиции, необходимо подержать 30 сек. под светоотверждаемой лампой для отверждения. Это имеет особое значение для обеспечения легкого снятия в конце периода лечения.
- Недостаточная мощность источника света для фотополимеризации, может привести к ухудшению качества приклеивания брекетов. Не используйте приборы с мощностью менее 300мW/см
- После выдавливания адгезива следует немедленно закрыть шприц колпачком. Избегайте попадания прямых лучей света на адгезив.
- Когда клей затвердеет, установите эстетическую дугу (облицованную) наименьшего диаметра в паз брекетов и зафиксируйте выбранной лигатурой. **Нельзя использовать дуги с чрезмерным усилием!**
- За последним зубом, на котором наклеен брекеты, доктор обрезает излишек дуги (чтобы она не поранила слизистую щеки), иногда кончик дуги загибается.

В случаях, когда у пациента удаляются зубы, врач применяет либо эластические цепочки для закрытия промежутка, либо металлические пружины. Сегмент эластичной цепочки, состоящий из нескольких звеньев одевается на зубы вокруг промежутка удаленного зуба. Сокращаясь, цепочка сближает зубы в сторону промежутка. Силу и направление перемещения регулирует врач-ортодонт.

Пружины для раскрытия промежутка устанавливаются прямо на дугу между теми зубами, где должно быть создано пространство

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Для закрытия промежутка используются пружины с ушками, и они устанавливаются на крючки брекетов или дуги с двух сторон от того пространства, которое должно быть закрыто. В отличие от цепочки, металлическая пружина обладает большей и более постоянной силой.



Для проверки правильности установки системы и ее элементов обратитесь к литературе, описывающей общие принципы установки брекет систем.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ортодонтические системы предназначены для использования только подготовленными врачами - ортодонтами. Они обязаны учитывать противопоказания, побочные эффекты, осложнения и взаимодействия в оценке пациента и использования изделия, которые могут применяться при ортодонтическом лечении и должны информировать пациентов о преимуществах и возможных побочных эффектах или осложнениях. Существует большое количество опасностей при использовании брекет-системы, они могут отличаться в зависимости от пациента и врач -ортодонт должен быть проинформирован и обучен установке этих систем.

К основным мерам предосторожности можно отнести следующие:



1-Не пытайтесь использовать элементы брекет-системы повторно!



2-При появлении какой-либо аллергической реакции следует немедленно прекратить использование брекетов и всех элементов системы.



3-Не используйте систему при недостаточном количестве зубов.



4-Проверяйте надежность крепления брекетов во избежание отклеивания.



5-Устанавливайте ортодонтические дуги, пружины, цепочки в соответствии с необходимой силой подобранной для каждого пациента в отдельности.



6-Не используйте изделия в случае повреждения упаковки.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



7- Не устанавливайте систему пациентам с нарушениями психики.



8- Не оставляйте при установке незафиксированных и острых концов (например дуг ортодонтических). Это может привести к травме пациента.



9- Не устанавливайте систему при явно недостаточной гигиене полости рта.

Вся информация, необходимая для объяснения остаточных рисков указывается в сопроводительных документах, относящихся к изделиям (этикетки, инструкции по применению, процедуры, каталоги).

10. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1) Брекет керамический самолигирующий Genius C






Материал

Оксид алюминия, марка Al₂O₃ - 99,998%, Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики


Наименование	Значение
Форма и цвет	Твердая и белая
Удельный вес	2,5-5,0 г/см ³
Микрокрист. размер частиц	0,25 мкм
Точка кипения	4,300°C
Температура плавления	2,680°C
Прочность на изгиб	1,200 мПа
Устойчивость к разрушению	7 мПа · м ^{1/2}
Модуль Юнга (жесткость)	210ГПа
Твердость по Виккерсу	1,200Hv
Коэффициент тепл. расширения	10.510 ⁻⁶ К ⁻¹

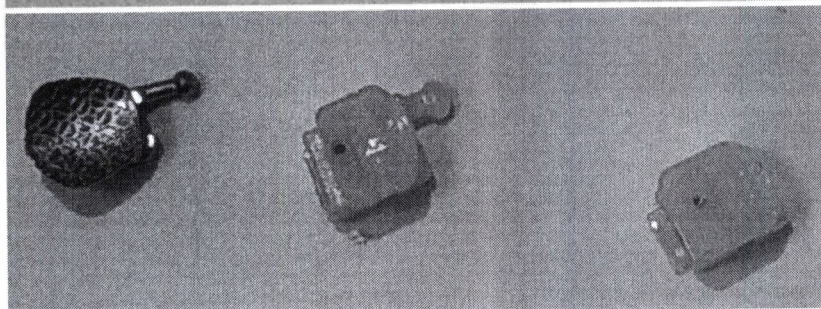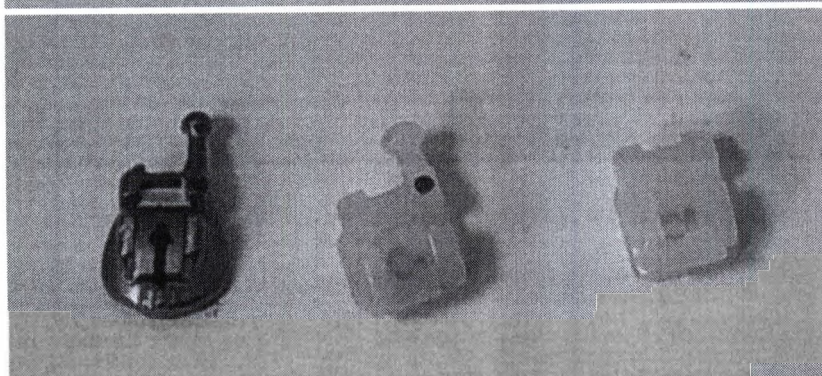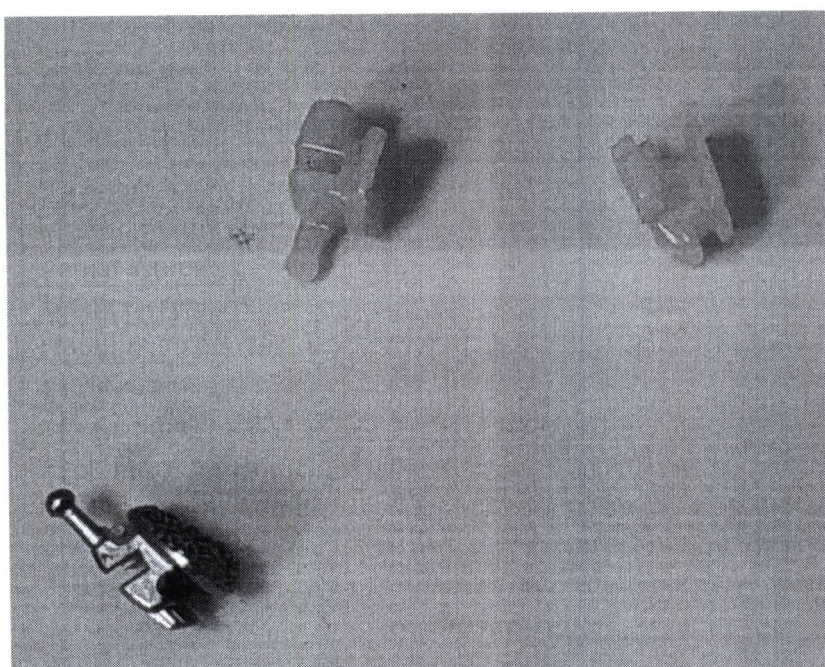

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Цельная конструкция Genius Crystal - это цельный пассивный самолигирующий кронштейн, изготовленный из высококачественного оксида алюминия. Фирменный материал

Формула создает лучший цвет, который соответствует естественному цвету зуба. Genius Crystal может предоставить вам наилучший клинический результат,

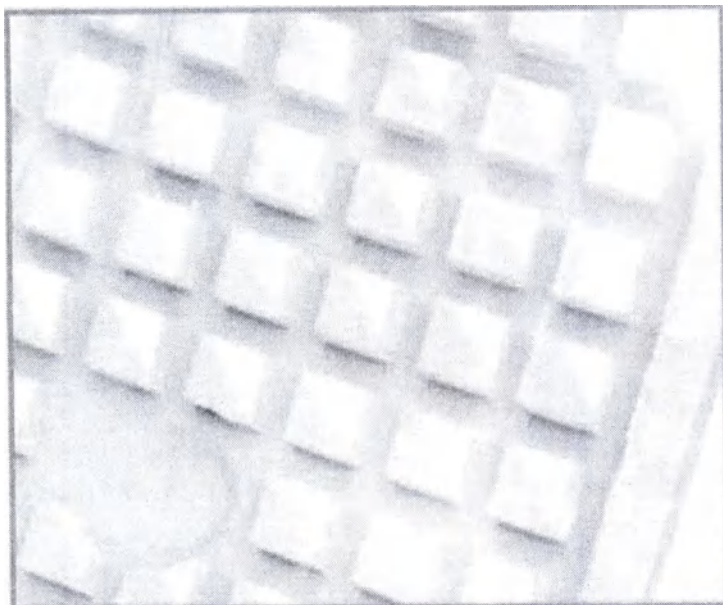

06. Финишная фаза детализации

Если необходимо

- .019x.025 BETA TITANIUM с индивидуальной формой арки (в соответствии с формой арки, предоставленной .018x.025 THERMAL ULTRA или .019x.025 STAINLESS STEEL).

Ультрафинишная проволока для точной коррекции крутящего момента и выравнивания, с эластичными вставками из межзубных промежутков для идеальной окклюзии. 4-8 недель.

05. Закрытие пространства

При необходимости из-за экстракций

- .019x.025 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, предназначенная для закрытия пространства с низким коэффициентом трения с помощью эластичных модулей или витых пружин. 10-20 недель.

04. Рабочая фаза

- .019x.025 BETA TITANIUM с индивидуальной формой арки (в соответствии с формой арки, заданной THERMAL ULTRA 018x.025). Для точной коррекции крутящего момента и центровки. Конечная отделка провода в классах I без надобности

- для А-Р межзубчатых резинок.

- .019x.025 STAINLESS STEEL, проведенная или не опубликованная, для окклюзионной коррекции А-Р с помощью эластичных элементов. 5-8 недель.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

03. Фаза установления крутящего момента

Если требуется дополнительный крутящий момент

- на передних зубах, 0,019х,025

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЕТСЯ с дополнительным крутящим моментом 20 ° на передней части в течение 5-12 недель.

02. Нивелирование

- .014х.025 THERMAL ULTRA UPPER (ТЕРМАЛЬНЫЙ УЛЬТРА ВЕРХНИЙ) и .018х.018 THERMAL ULTRA LOWER (ТЕРМАЛЬНЫЙ УЛЬТРА НИЖНЯЯ) на 10-15 недель.

Для нижней арки может потребоваться дополнительный .014х.025 THERMAL ULTRA.

- .018х.025 THERMAL ULTRA UPPER AND LOWER (ТЕРМАЛЬНАЯ УЛЬТРА ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ) и контроль качества через 6 недель для повторного соединения или перехода к следующей последовательности. Максимум 6-8 недель.

01. Выравнивать

- .014 THERMAL ULTRA (ТЕРМАЛЬНАЯ УЛЬТРА) 8-16 недель
- .018 THERMAL ULTRA (ТЕРМАЛЬНАЯ УЛЬТРА) 8-16 недель

Система идентификации

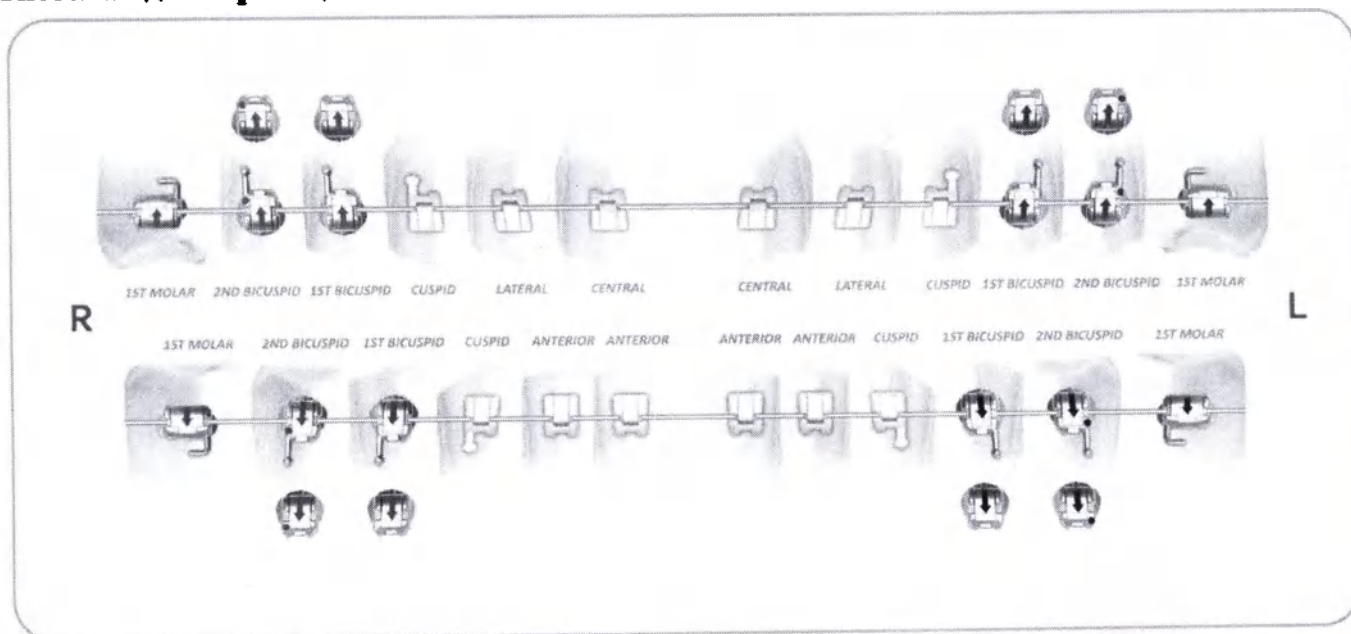


Таблица идентификации изделий

Genius .022"


Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина $\pm 5\%$
1 1	Центральный	+14	+5	3.5 мм
2 2	Боковой	+6	+9	3.3 мм
3 3	Клык с крючком	+3	+5	3.4 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	+2	2.8 мм
6 6	1-й моляр с крючком	-17	0	4.3 мм

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина $\pm 5\%$
1/2 1/2	Передний	+6	0	3.3 мм
3 3	Клык с крючком	+3	+5	3.4 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-11	+4	2.8 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-16	+2	2.8 мм
6 6	1-й моляр с крючком	-20	+2	4.3 мм

Преимущества

- Прочность как у металла– Высокая устойчивость к царапинам и повреждению
- Высокая эстетичность– Меньше трения, обесцвечивания / окрашивания и бактериальной адгезии
- Возможность самолигирования
- Микро-кристаллический размер частиц

2) Брекет металлический самолигирующий Genius System

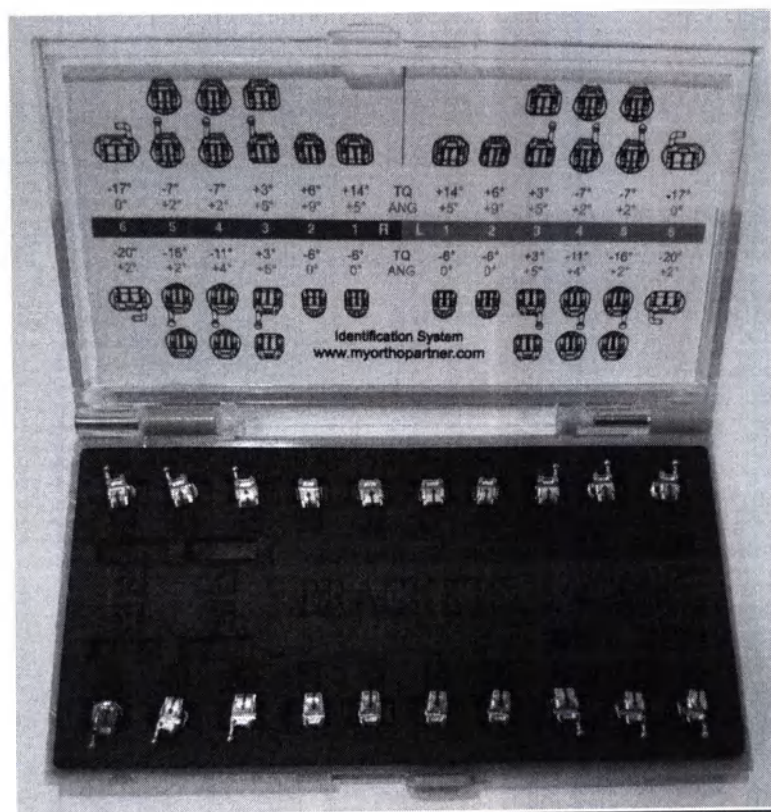

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Материал

Кобальт хромовый молибденовый сплав, марка Cobalt Chromium Molybdenum Alloys:

Кобальт(Co) - 63-68%, Хром(Cr) – 27-30%, Молибден(Mo) – 5-7%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

Технические характеристики

Твердость, по Виккерсу	129
Удельный вес	6,0 - 6,5 г/см ³
Модуль упругости	193 - 200 ГПа
Прочность на растяжение, доходность	215 МПа
Плотность	8 г/см ³
Теплопроводность	16,2 Вт / мК
Прочность на сжатие	210 МПа
Предел текучести	210 МПа Мин
Прочность на разрыв	520 до 720 МПа
Прочность на изгиб	Не применим
Устойчивость к разрушению	Не применим
Жесткость	Не применим
Прозрачность	Не применим
Светопередача	Не применим
Светоотражающий индекс	Не применим
Аббе индекс и т.д.	Не применим

Цельная конструкция Genius - это пассивная самолигирующаяся скобка, которая сочетает в себе прочность и точность в единую конструкцию. Гладкая поверхность конструкции брекета способствует гигиене полости рта, что может предотвратить образование зубного камня и зубного налета во время лечения.



Однокомпонентная конструкция MIM

- Точный рецепт
- Предотвратить разделение тела и основания



Уменьшить трение


- Арочный провод с закругленными углами

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ




Комфорт пациентов

- Гладкие закругленные края

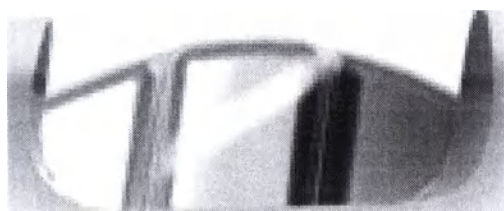


Линия центра писцов

- Помогите сориентировать кронштейн в нужном месте

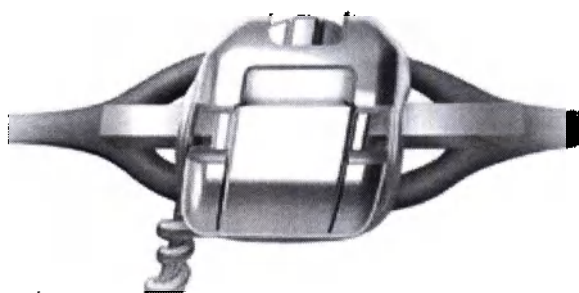


Tie Wing

- Достаточная зона обзора для легкого взаимодействия

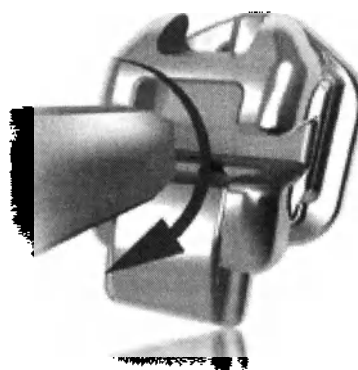


Механизм открытия / закрытия

- Открыть с помощью Genius Driver для большего комфорта
- Закрыть легким нажатием пальца
- Звуковой щелчок обеспечивает закрытие

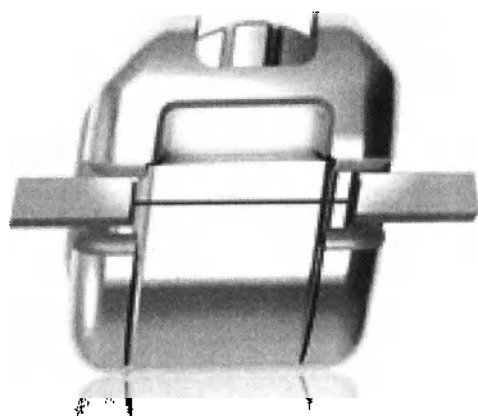

Полный контроль вращения


- Увеличение покрытия проводов
- точность слота
- Предотвратить нежелательную игру в слот

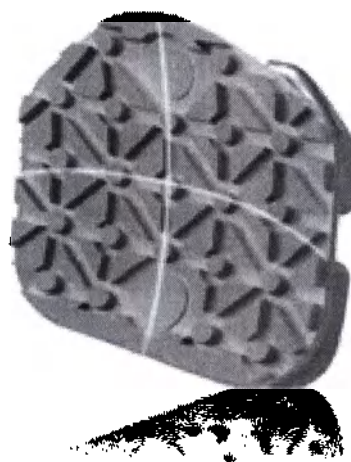

Базовый дизайн

- Надежная конструкция склеивания
- Хорошо контур для более удобного размещения
- Двусторчатые со смещением десны

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

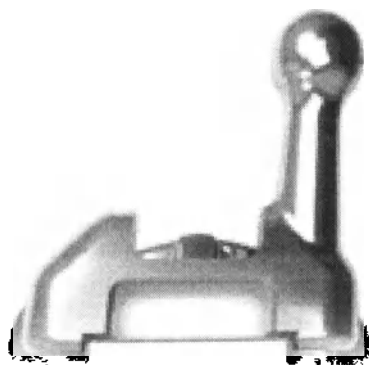

Крючки

- Полностью интегрированные крючки для 3,4,5



Профиль кронштейна

- Самый низкий вход / выход, улучшить комфорт пациентов

Преимущества

- Низкий профиль – Закругленные формы– Монолитность
- Максимальный комфорт для пациента– Стабильность при лечении

Низкий профиль круглой формы дизайн брекетов придает большой комфорт пациентам. Металлический брекет сделан из твердого металла и не подвержен деформации.

Брекеты ортодонтические, металлические – это металлические изделия, прикрепляемые к ортодонтической ленте или непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только подготовленными клиницистами (врачами - ортодонтами) в ортодонтии.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только в одной процедуре.

Брекеты ортодонтические, металлические разработаны для комфортного, безопасного, эффективного и простого использования ортодонтом, обеспечивающие полный контроль во время использования.

- Металлические части изготовлены из коррозионностойких сплавов
- Изделия устойчивы к воздействию жидкости, имитирующей слюну более 30 суток
- Изделия в наборе обладают вибропрочностью и ударопрочностью
- Изделие выдерживает пятикратное испытание на вибропрочность в режиме 10-55 Гц при амплитуде 0,35 мм, а также воздействие пикового ударного ускорения 10 g в течение 16 мс.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Система идентификации

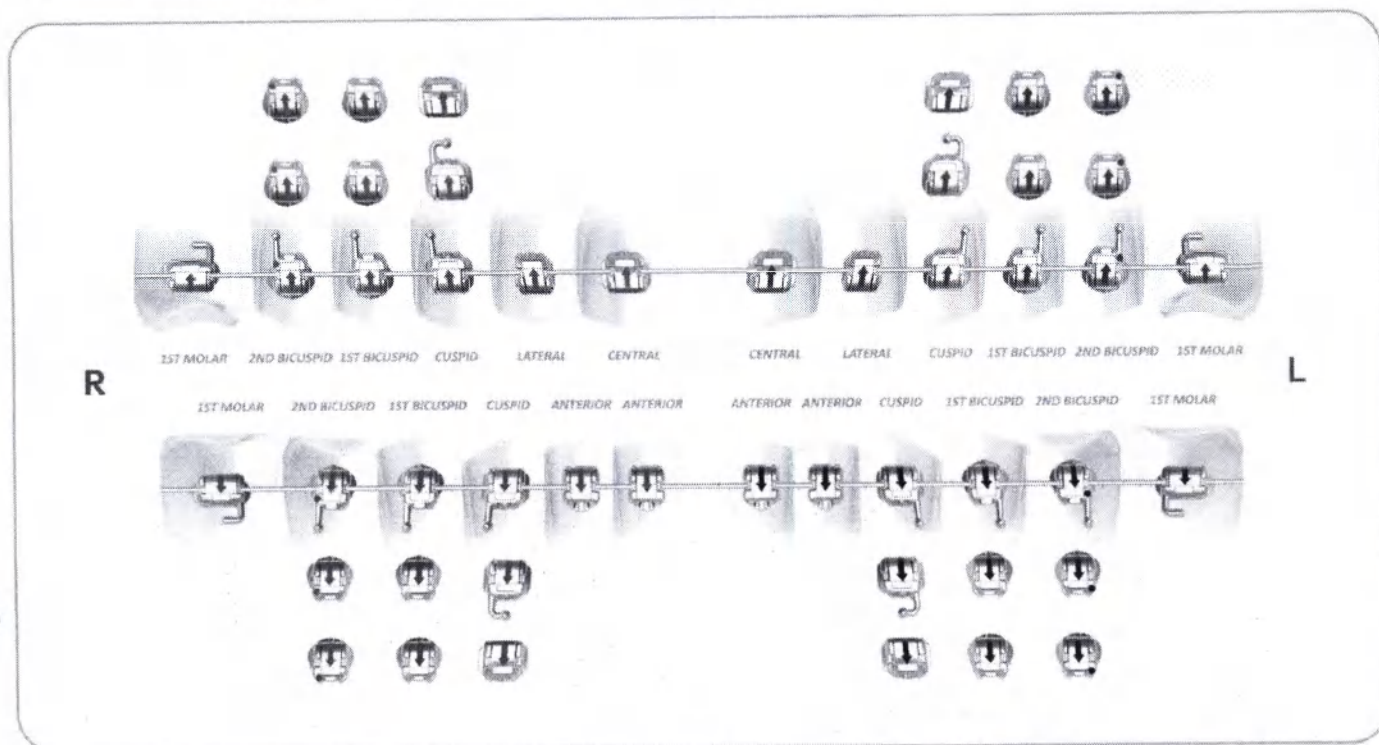



Таблица идентификации изделий

Genius .022"

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина $\pm 5\%$
1 1	Центральный	+14	+5	3.3 мм
2 2	Боковой	+6	+9	2.8 мм
3 3	Клык с крючком	+3	+5	3.1 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	+2	2.8 мм
6 6	1-й моляр с крючком	-17	0	4.3 мм

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина $\pm 5\%$
1/2 1/2	Передний	+6	0	2.8 мм
3 3	Клык с крючком	+3	+5	3.1 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-11	+4	2.8 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-16	+2	2.8 мм
6 6	1-й моляр с крючком	-20	+2	4.3 мм

3) Брекеты металлический самолигирующий Heimas mini

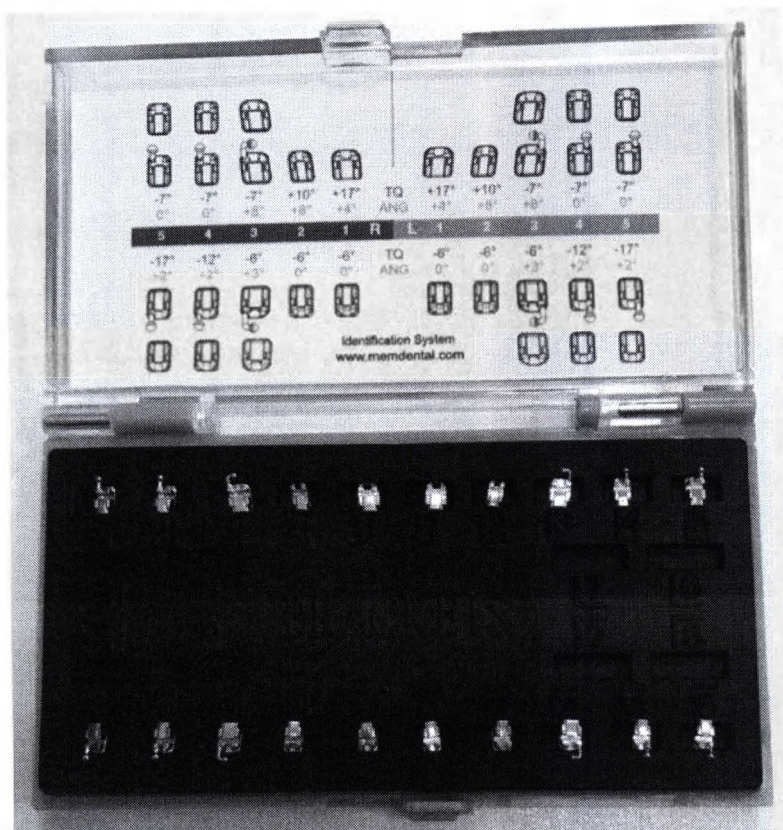**Материал**

Кобальт хромовый молибденовый сплав, марка Cobalt Chromium Molybdenum Alloys:

Кобальт(Co) - 63-68%, Хром(Cr) – 27-30%, Молибден(Mo) – 5-7%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

Технические характеристики

Наименование	Значение
Твердость, по Виккерсу	129
Удельный вес	3,0 - 4,5 г/см ³
Модуль упругости	193 - 200 ГПа
Прочность на растяжение, доходность	215 МПа
Плотность	8 г/см ³
Теплопроводность	16,2 Вт / мК
Прочность на сжатие	210 МПа
Предел текучести	210 МПа Мин
Прочность на разрыв	520 до 720 МПа
Прочность на изгиб	Не применим
Устойчивость к разрушению	Не применим
Жесткость	Не применим
Прозрачность	Не применим
Светопередача	Не применим
Светоотражающий индекс	Не применим
Аббе индекс и т.д.	Не применим

Преимущества

- Низкий профиль – Закругленные формы – Монолитность
- Максимальный комфорт для пациента – Стабильность при лечении

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Низкий профиль круглой формы дизайн брекетов придает большой комфорт пациентам. Металлический брекет сделан из твердого металла и не подвержен деформации.

Брекеты ортодонтические, металлические – это металлические изделия, прикрепляемые к ортодонтической ленте или непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только подготовленными клиницистами (врачами - ортодонтами) в ортодонтии.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только в одной процедуре.

Брекеты ортодонтические, металлические разработаны для комфортного, безопасного, эффективного и простого использования ортодонтом, обеспечивающие полный контроль во время использования.

- Металлические части изготовлены из коррозионностойких сплавов
- Изделия устойчивы к воздействию жидкости, имитирующей слюну более 30 суток
- Изделия в наборе обладают вибропрочностью и ударопрочностью
- Изделие выдерживает пятикратное испытание на вибропрочность в режиме 10-55 Гц при амплитуде 0,35 мм, а также воздействие пикового ударного ускорения 10 g в течение 16 мс.



Heimas V



Heimas Mini


Таблица идентификации изделий

MBT (McLaughlin, Bennet & Trevisi) .022"/.018"

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1 1	Центральный	+17	+4	2.8 мм
2 2	Боковой	+10	+8	2.3 мм
3 3	Клык с крючком	-7	+8	2.8 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	0	2.3 мм

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1/2 1/2	Передний	-6	0	2.3 мм
3 3	Клык с крючком	-6	+3	2.8 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-12	+2	2.3 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-17	+2	2.3 мм

4) Брекеты металлические EPS SS Bracket

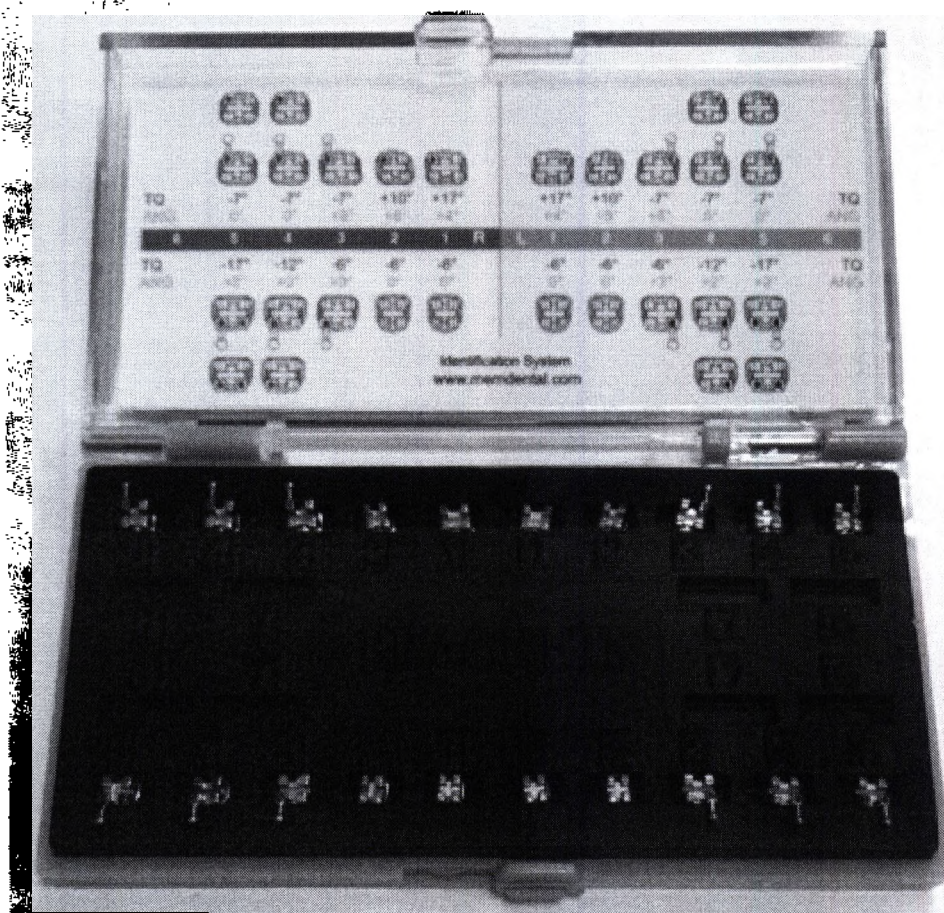

Материал

Сплав нержавеющей стали, марка 17-4 Stainless Steel: Железо(Fr) – 73-75%, Хром(Cr) - 16-17.5%, Никель(Ni) – 3-4%, Медь(Cu) 3-4%. Производитель: Epson Atmix Corporation, Япония

Технические характеристики

Твердость, по Виккерсу	129
Удельный вес	5,0 - 6,0 г/см ³
Модуль упругости	193 - 200 ГПа
Прочность на растяжение, доходность	215 МПа
Плотность	8 г/см ³
Теплопроводность	16,2 Вт / мК
Прочность на сжатие	210 МПа
Предел текучести	210 МПа Мин
Прочность на разрыв	520 до 720 МПа
Прочность на изгиб	Не применим
Устойчивость к разрушению	Не применим
Жесткость	Не применим
Прозрачность	Не применим
Светопередача	Не применим
Светоотражающий индекс	Не применим
Аббе индекс и т.д.	Не применим

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

– Низкий профиль – Закругленные формы– Монолитность

Преимущества

– Максимальный комфорт для пациента– Стабильность при лечении

Низкий профиль круглой формы дизайн брекетов придает большой комфорт пациентам. Металлический брекет сделан из твердого металла и не подвержен деформации.

Брекеты ортодонтические, металлические – это металлические изделия, прикрепляемые к ортодонтической ленте или непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только подготовленными клиницистами (врачами - ортодонтами) в ортодонтии.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только в одной процедуре.

Брекеты ортодонтические, металлические разработаны для комфортного, безопасного, эффективного и простого использования ортодонтом, обеспечивающие полный контроль во время использования.

- Металлические части изготовлены из коррозионностойких сплавов
- Изделия устойчивы к воздействию жидкости, имитирующей слюну более 30 суток
- Изделия в наборе обладают вибропрочностью и ударопрочностью
- Изделие выдерживает пятикратное испытание на вибропрочность в режиме 10-55 Гц при амплитуде 0,35 мм, а также воздействие пикового ударного ускорения 10 g в течение 16 мс.

EPS_SS - это цельный кронштейн, изготовленный по гибридным технологиям, сочетающий технологию MIM с технологией ЧПУ. Технология MIM обеспечивает наиболее удобные кронштейны, в то время как ЧПУ обеспечивает наиболее точные прорези арочной проволоки, что позволяет кронштейнам EPS сократить время обработки и обеспечить превосходный результат.


Конструкция из нержавеющей стали 17-4

- Избегайте разделения между корпусом кронштейна и прокладкой.

- Точный рецепт


Комфорт пациента

- Поверхность кронштейна и углы имеют закругленные углы

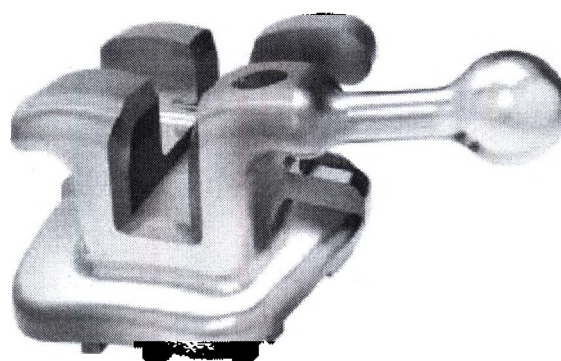


Линия центра писцов

- Постоянный визуальный справочник для правильного размещения

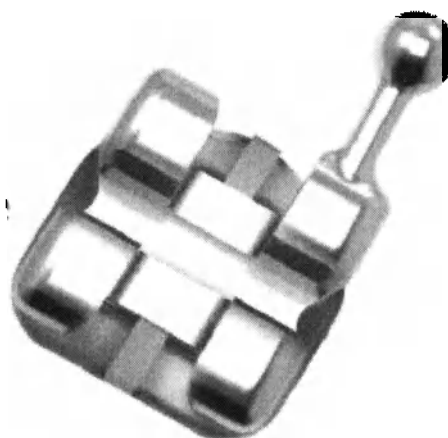


Точный размер слота - лучший результат "

- Допуск на фрезерный шлиц с ЧПУ $\pm 0,015$ мм

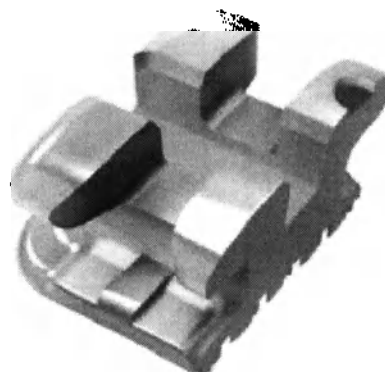


Уменьшенное трение слота Archwire

- С-образный дизайн на углах прорези арки

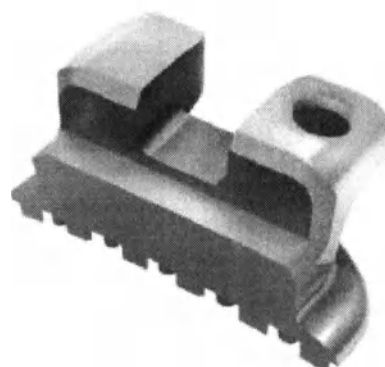

Tie Wing


- Достаточная площадь для легкого захвата

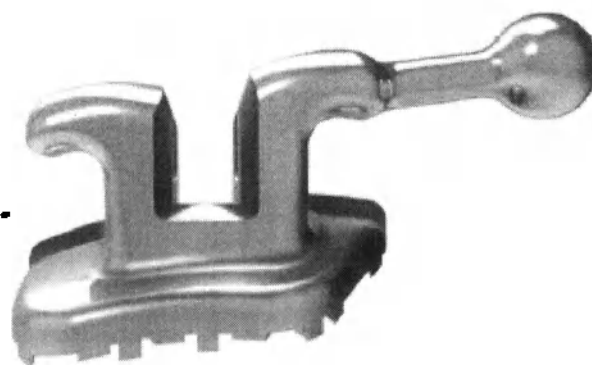

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Инновационный дизайн площадки

- Дизайн лабиринта, надежное соединение и упрощенная очистка
- Отличная прочность сцепления: 11-12Мра
- Отличное анатомическое очертание для легкого размещения
- Крутящий момент в базе для правильного соединения

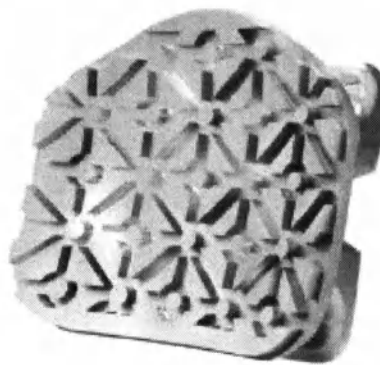

Система идентификации

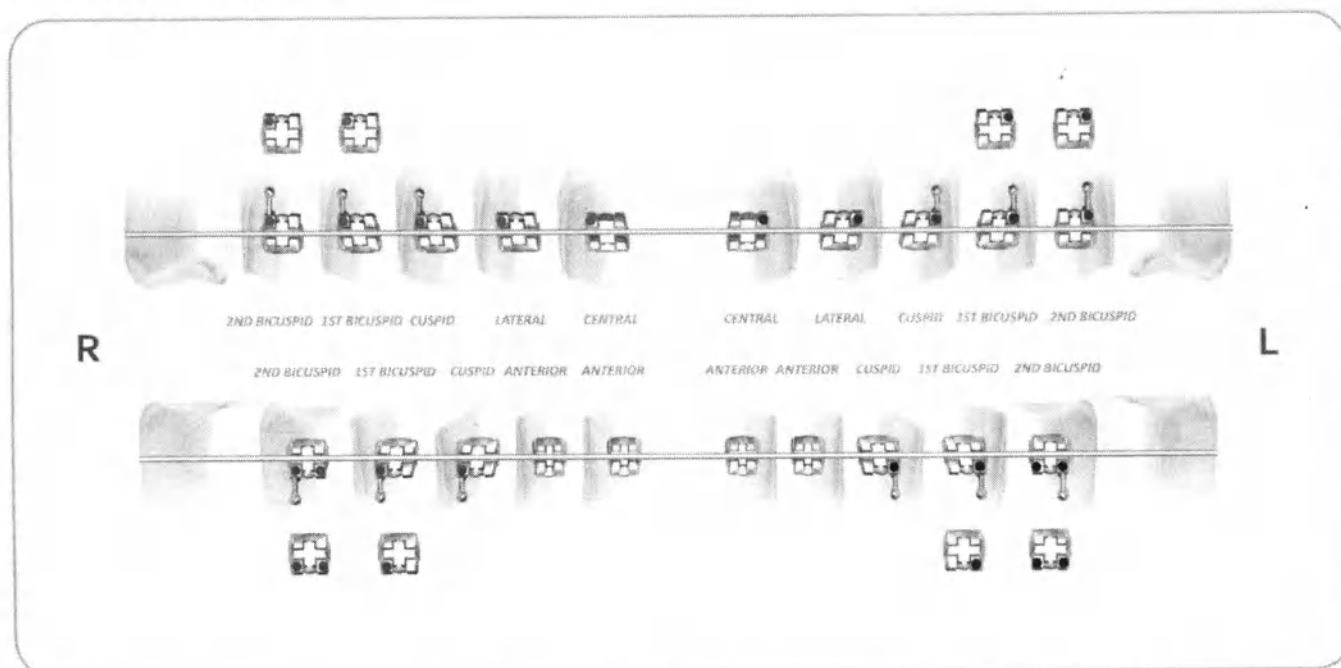



Таблица идентификации изделий

MBT (McLaughlin, Bennet & Trevisi) .022"/.018"

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1 1	Центральный	+17	+4	3.35 мм
2 2	Боковой	+10	+8	2.67 мм
3 3	Клык с крючком	-7	+8	3.22 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	0	2.97 мм

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1/2 1/2	Передний	-6	0	2.46 мм
3 3	Клык с крючком	-6	+3	3.25 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-12	+2	3.1 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-17	+2	3.1 мм

5) Брекеты металлические Zeemas A Metal Bracket

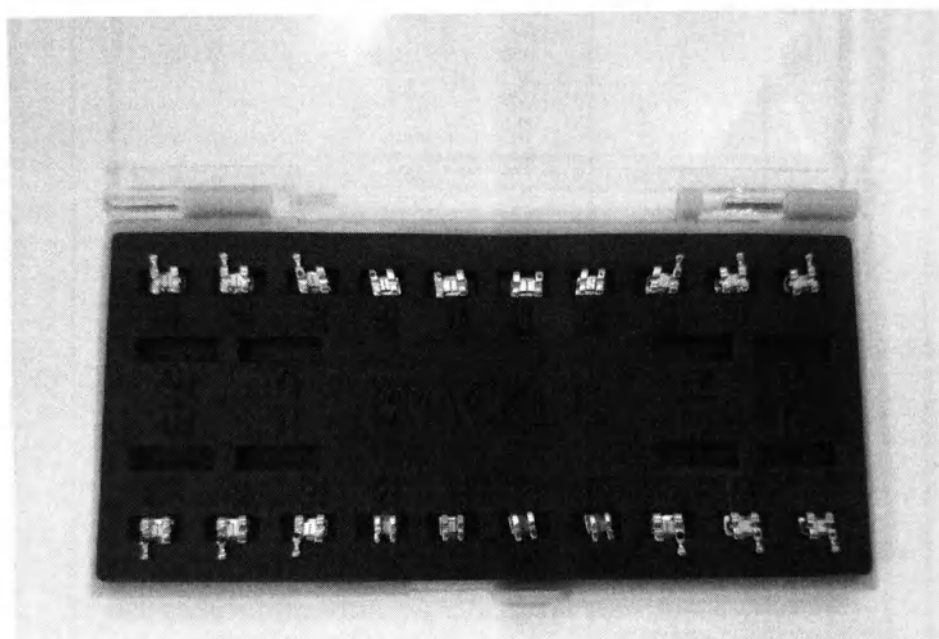

Материал

Сплав нержавеющей стали, марка 17-4 Stainless Steel: Железо(Fr) – 73-75%, Хром(Cr) - 16-17.5%, Никель(Ni) – 3-4%, Медь(Cu) 3-4%. Производитель: Epsom Atmix Corporation, Япония

Технические характеристики

Наименование	Значение
Твердость, по Виккерсу	129
Удельный вес	6,0 - 6,5 г/см ³
Модуль упругости	193 - 200 ГПа
Прочность на растяжение, доходность	215 МПа
Плотность	8 г/см ³
Теплопроводность	16,2 Вт / мК
Прочность на сжатие	210 МПа
Предел текучести	210 МПа Мин
Прочность на разрыв	520 до 720 МПа
Прочность на изгиб	Не применим
Устойчивость к разрушению	Не применим
Жесткость	Не применим
Прозрачность	Не применим
Светопередача	Не применим
Светоотражающий индекс	Не применим
Аббе индекс и т.д.	Не применим

Преимущества

- Низкий профиль – Закругленные формы– Монолитность
- Максимальный комфорт для пациента– Стабильность при лечении

Низкий профиль круглой формы дизайн брекетов придает большой комфорт пациентам.
Металлический брекет сделан из твердого металла и не подвержен деформации.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Брекеты ортодонтические, металлические – это металлические изделия, прикрепляемые к ортодонтической ленте или непосредственно к зубу для удерживания ортодонтической проволоки и/или другого предмета, используемых для оказания давления на зуб, чтобы изменить его положение. Применяются при изготовлении несъемных ортодонтических конструкций.


Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только подготовленными клиницистами (врачами - ортодонтами) в ортодонтии.

Брекеты ортодонтические, металлические предназначены для использования только в одной процедуре.

Брекеты ортодонтические, металлические разработаны для комфортного, безопасного, эффективного и простого использования ортодонтом, обеспечивающие полный контроль во время использования.

- Металлические части изготовлены из коррозионностойких сплавов
- Изделия устойчивы к воздействию жидкости, имитирующей слюну более 30 суток
- Изделия в наборе обладают вибропрочностью и ударопрочностью
- Изделие выдерживает пятикратное испытание на вибропрочность в режиме 10-55 Гц при амплитуде 0,35 мм, а также воздействие пикового ударного ускорения 10 g в течение 16 мс.

МЕМ разработал новый цельный металлический дизайн, исключая возможность разделения корпуса и прокладки. Точное изготовление этой сложной конструкции с арочными проволочными канавками стало возможным благодаря технологии Metal Injection Molding (MIM). Клинически доказано, что уникальная лабиринтная основа обеспечивает отличную прочность сцепления и легкое разъединение.

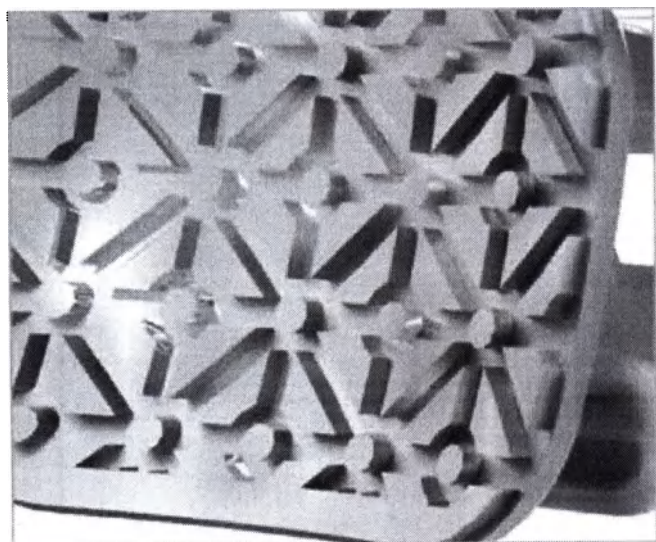

Характеристики

- Конструкция объединяет прочность и точность в единую конструкцию; позволяет в полной мере использовать все аспекты встроенного рецепта, что позволяет легко достичь желаемых моментов и углов.
- Maze Base Design создает превосходную прочность сцепления.
- Центральная линия для удобного размещения кронштейна.
- Torque In Base позволяет более точно разместить кронштейн во время склеивания.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Нано полировка и супергладкая поверхность для повышения комфорта пациента.

Система идентификации

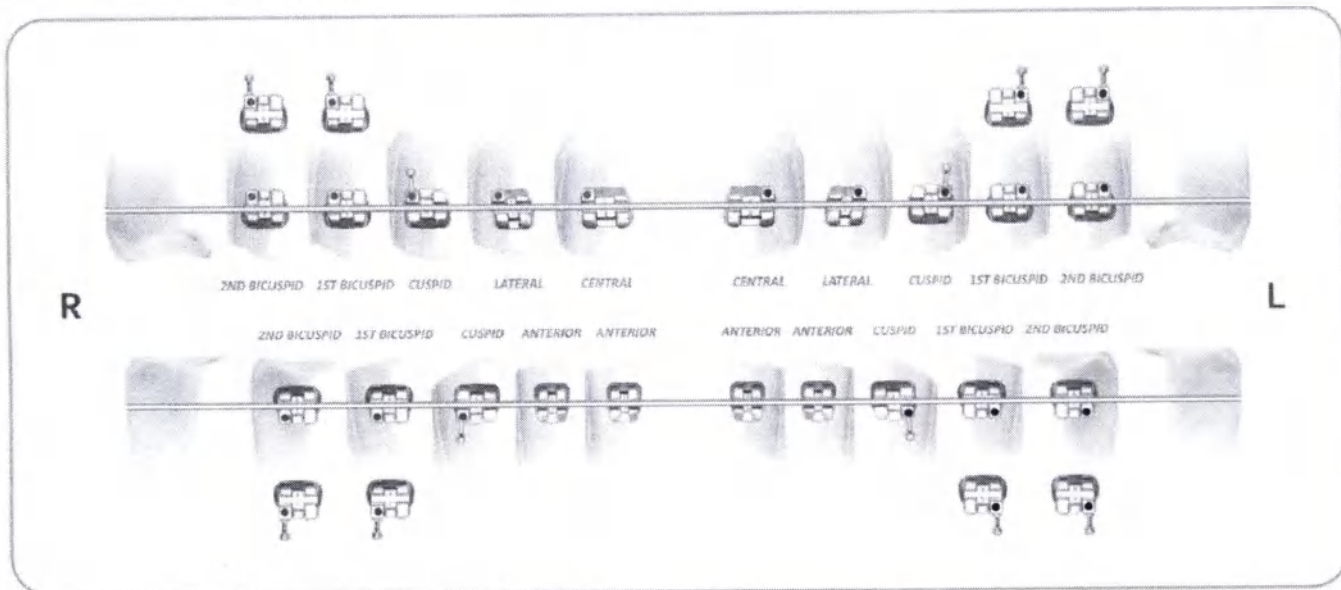


Таблица идентификации изделий

MBT (McLaughlin, Bennet & Trevisi) .022"/.018"

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1 1	Центральный	+17	+4	3.6 мм
2 2	Боковой	+10	+8	2.8 мм
3 3	Клык с крючком	-7	+8	3.2 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	0	3.2 мм


Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1/2 1/2	Передний	-6	0	2.4 мм
3 3	Клык с крючком	-6	+3	3.2 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-12	+2	3.2 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-17	+2	3.2 мм

Roth .022"/.018"

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1 1	Центральный	+12	+4	3.6 мм
2 2	Боковой	+8	+8	2.8 мм
3 3	Клык с крючком	0	+8	3.2 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	0	3.2 мм

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина ±5%
1/2 1/2	Передний	-6	0	2.4 мм
3 3	Клык с крючком	-6	+3	3.2 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-12	+2	3.2 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-17	+2	3.2 мм

6) Бреккет керамический Zeemas C Ceramic Bracket

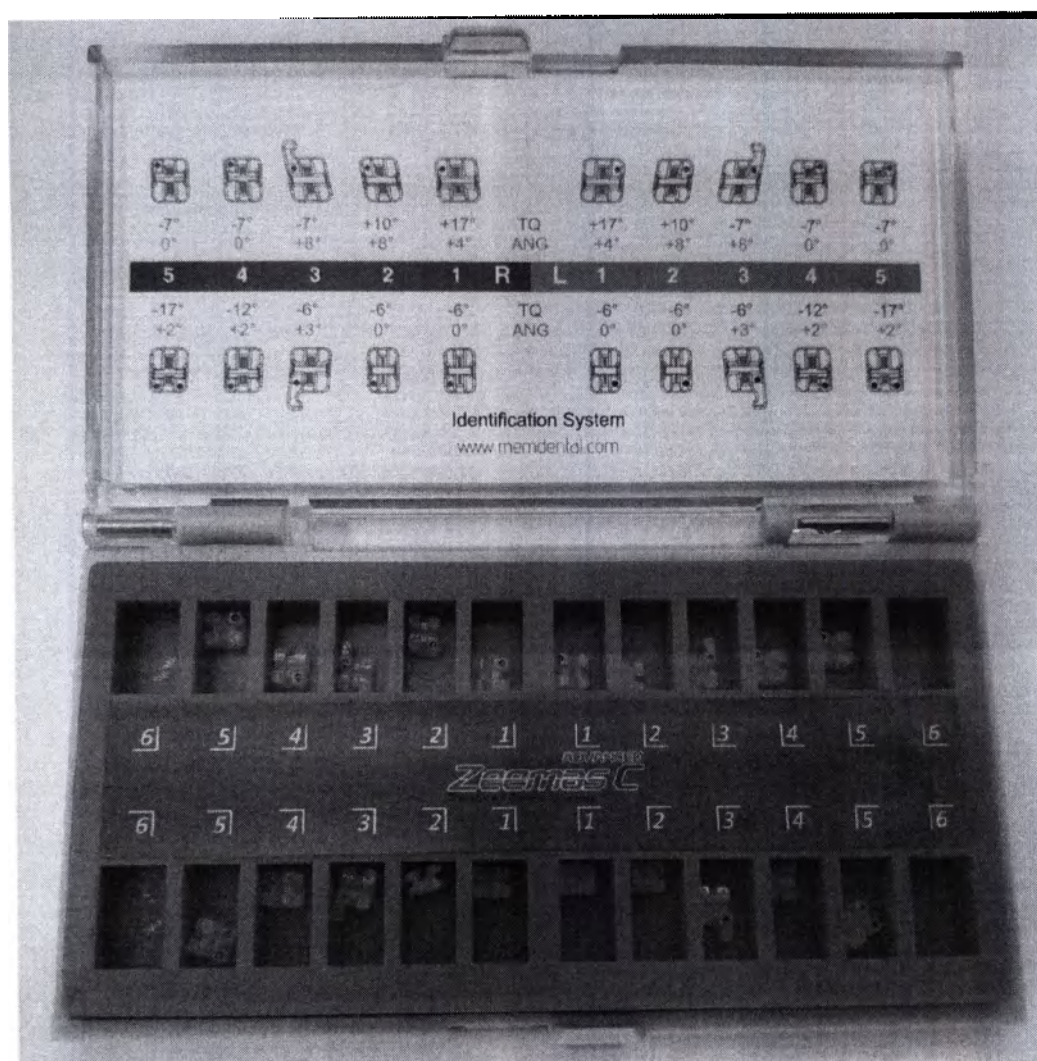


Материал

Оксид алюминия, марка Al₂O₃ - 99,998%, Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань


Технические характеристики

Форма и цвет	Твердая и белая
Удельный вес	2,5-5,0 г/см ³
Микрокрист. размер частиц	0.25 мкм
Точка кипения	4,300°C
Температура плавления	2,680°C
Прочность на изгиб	1,200 мПа
Устойчивость к разрушению	7 мПа · м ^{1/2}
Модуль Юнга (жесткость)	210ГПа
Твердость по Виккерсу	1,200Hv
Коэффициент тепл. расширения	10.610 ⁻⁶ К ⁻¹

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

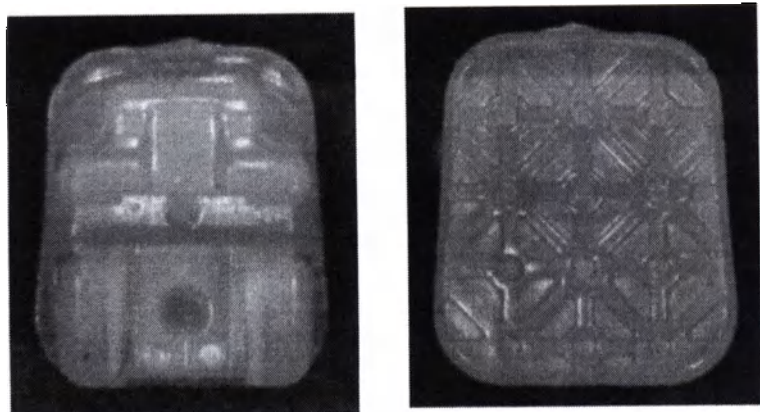

MEM Zeemas C изготовлен с использованием высококачественного оксида алюминия. Это биосовместимый полный эстетический кронштейн, который обеспечивает слот с низким коэффициентом трения. Ортодонты нуждаются в функциональности материала, а пациенты любят эстетику керамики.

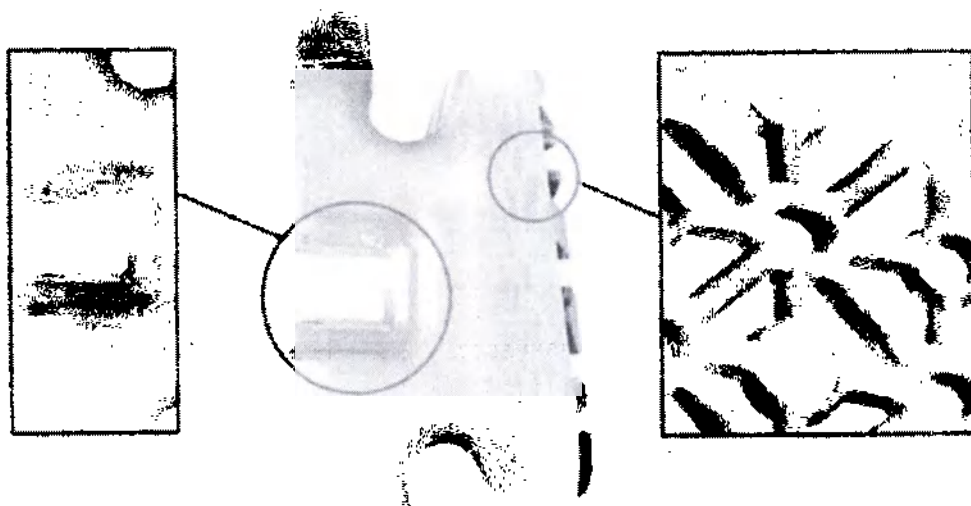

Характеристики

- Изготовлено с использованием технологии керамического литья под давлением {CIM}, которая позволяет изготавливать небольшие керамические кронштейны со сложными формами и высокой точностью размеров.
- Полупрозрачный оксид алюминия, химически полированный для непревзойденной прочности и приятной эстетики
- Сверхгладкая поверхность прорези, обеспечивающая отличную механику скольжения.
- Низкопрофильный дизайн всего 2,2 мм.
- Torque-In-Base для выравнивания слотов уровня.
- Надежная конструкция основания склеивания увеличивает силу склеивания.

Система идентификации

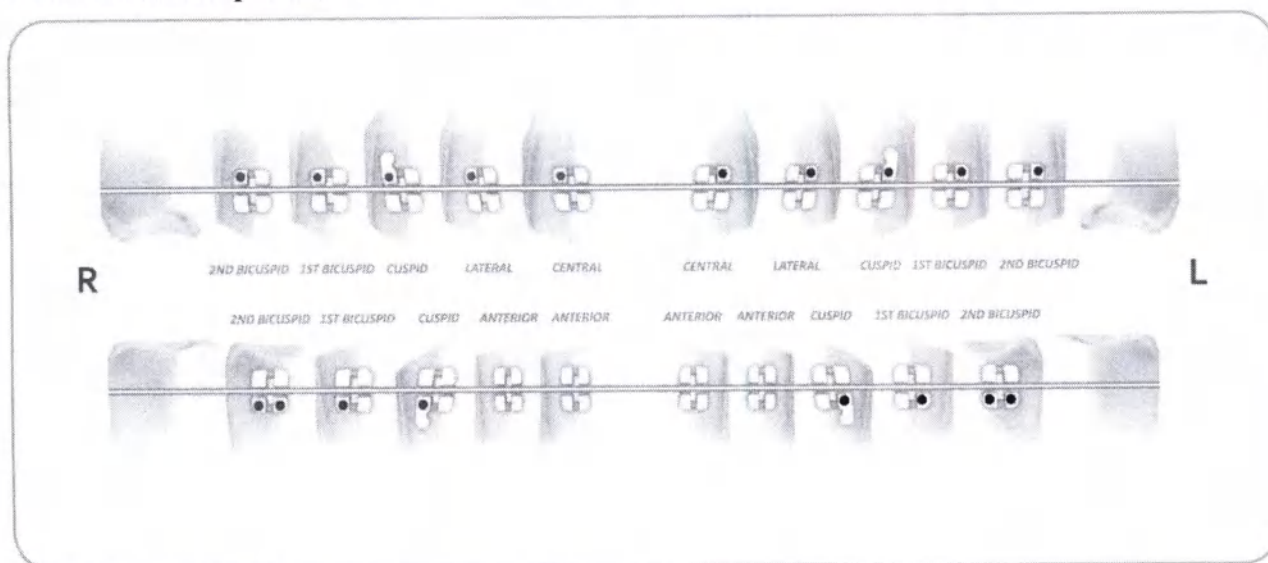


Таблица идентификации изделий

MBT (McLaughlin, Bennet & Trevisi) .022"

Верхняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина $\pm 5\%$
1 1	Центральный	+17	+4	3.4 мм
2 2	Боковой	+10	+8	3.0 мм
3 3	Клык с крючком	-7	+8	3.2 мм
4/5 4/5	Двустворчатый с крючком	-7	0	3.0 мм

Нижняя челюсть		Торк	Ангуляция	Ширина $\pm 5\%$
1/2 1/2	Передний	-6	0	2.5 мм
3 3	Клык с крючком	-6	+3	3.2 мм
4 4	1" Двустворчатый с крючком	-12	+2	3.0 мм
5 5	2" Двустворчатый с крючком	-17	+2	3.0 мм

Керамическое изделие MEM имеет конструкцию с двумя сдвоенными крыльями, которая имеет более высокую прочность. Сравнение эквивалентности продаваемого устройства

MEM - это ортодонтический керамический брекет, который, как утверждается, является существенным эквивалентом других продаваемых продуктов, с тем же назначением и схожим дизайном продукта.

Керамические брекеты - эстетическая альтернатива пластиковым брекетам - обеспечивают значительно лучшую твердость и жесткость по сравнению с полимерными приборами. Кроме того, керамические брекеты нового поколения имеют улучшенные характеристики отслоения, и, следовательно, риск повреждения эмали на этом этапе исключается. и эти приборы имеют некоторые проблемы из-за их хрупкой природы. В частности, монокристаллическая керамика, которая является наиболее прозрачной и, следовательно, наиболее эстетичной, имеет низкую вязкость разрушения из-за своей неспособности поглощать энергию во время нагрузки, что приводит к разрушению. Поскольку критическое напряжение для начала трещины в хрупких твердых телах зависит от модуля упругости и критического поверхностного натяжения

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

материала, внутриротовое старение предрасполагает к разрушению. Этот эффект возникает из-за воздействия влаги и результирующего снижения критического поверхностного натяжения материала, что снижает значение критического напряжения.

7) Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE



Щечные замки-трубки BUCCAL TUBE изготовлены по последнему слову техники и обладают всеми функциями для точного и легкого использования. Кроме того, замки-трубки с низким профилем доставляют меньше дискомфорта пациентам.

Представленные замки-трубки доставляет меньше дискомфорта пациент, очень функциональны и просты в использовании для врачей. Эти характеристики трубок достигаются за счет сочетания высокой прочности материала нержавеющей стали и точного исполнения. Все трубки разработаны с низким профилем и несут много идеальных функций, таких как изгиб крыла, крючок и база.

Материал:

Сплав нержавеющей стали, марка 304L : Углерод(C) – 0,03%, Кремний(Si) – 0,8%, Марганец(Mn) – 2%, Никель(Ni) – 10,5-12,5%, Сера(S) – 0,02%, Фосфор(P) – 0,035%, Хром(Cr) – 17-19%, Железо(Fe) - 67%. Производитель: Mistubishi Steel MFG. Co., LTD., Япония

Технические характеристики

Наименование	Значение
Твердость, по Виккерсу	129
Модуль упругости	193 - 200 ГПа
Прочность на растяжение, доходность	215 МПа
Плотность	8 г/см ³
Теплопроводность	16,2 Вт / мК
Прочность на сжатие	210 МПа


СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Предел текучести	210 МПа Мин
Прочность на разрыв	520 до 720 МПа
Прочность на изгиб	Не применим
Устойчивость к разрушению	Не применим
Жесткость	Не применим
Прозрачность	Не применим
Светопередача	Не применим
Светоотражающий индекс	Не применим
Аббе индекс и т.д.	Не применим


Низкопрофильный Виссо / Tube MEM меньше, чем другие буква / трубки на рынке сегодня. Позиционирующие направляющие и цветовые отступы упрощают обработку и сокращают драгоценное время стула.



Одиночная самолигирующаяся трубка

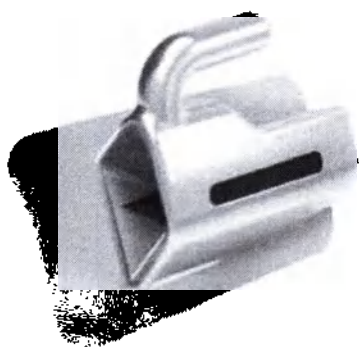


Одноместный не конвертируемый

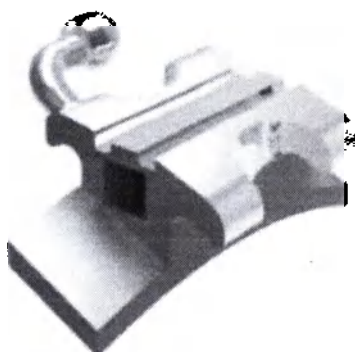

Один конвертируемый



Томбинированный конвертируемый

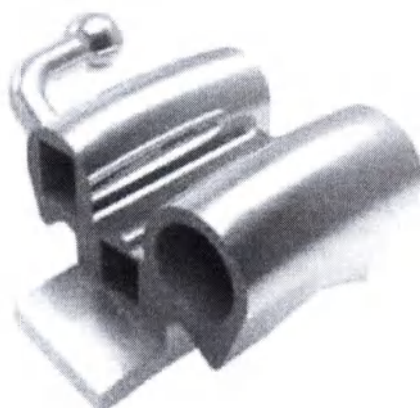

Трехместный конвертируемый

Таблица индификации изделий

Genius

Квадрант	Торк	Ангуляция	Дистальное смещение
Верхний	-17	0	+6
Нижний	-20	+2	+2

McLaughlin, Bennet & Trevisi

Квадрант	Торк	Дистальное смещение
Верхний	-14	+10
Нижний	-20	0

Roth

Квадрант	Торк	Дистальное смещение
Верхний	-14	+10
Нижний	-25	+4

ЗАМКИ ТРУБКИ

Описание устройства: Замок-трубка щечная -устройство, предназначенное для использования в ортодонтическом лечении.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Использование: Должна быть скреплена или сварена в молярном диапазоне и использована для ввода ортодонтической дуги.

Применение: Только для ортодонтического лечения.

Противопоказания:

1. Недостаточная гигиена полости рта пациента
2. Неспособность пациента сотрудничать в плане лечения
3. Известная аллергия на компоненты продукта
4. Болезнь и основные условия, препятствующие ортодонтическому лечению
5. Существующая корневая резорбция
6. Существующая декальцификация зубной эмали

Предупреждения и предостережения:


1. Используйте ортодонтический воск, чтобы защитить губы и десны и сделать лечение более комфортным
2. Только для одноразового использования. Повторное использование может привести к перекрестной инфекции.
3. Должен использоваться профессиональным ортодонтом.

8) Дуги ортодонтические

Для полного удовлетворения потребности врачей в функциональных и эстетических дугах, компания MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. выпускает дуги из нержавеющей стали, нитиноловых и титановых материалов. Специальный цвет ортодонтических дуг получил хорошую репутацию от врачей и пациентов. Все дуги изготавливаются только на нашем заводе в Тайвани.

- Мы предлагаем заготовку 35см прямой дуги или предварительно сформированные дуги. Предварительно сформированные дуги имеют большую или малую форму и находятся в отдельной упаковке.

- Стальные дуги очень эстетичный внешний вид.
- Возможно использование с брекетами двойных дуг.

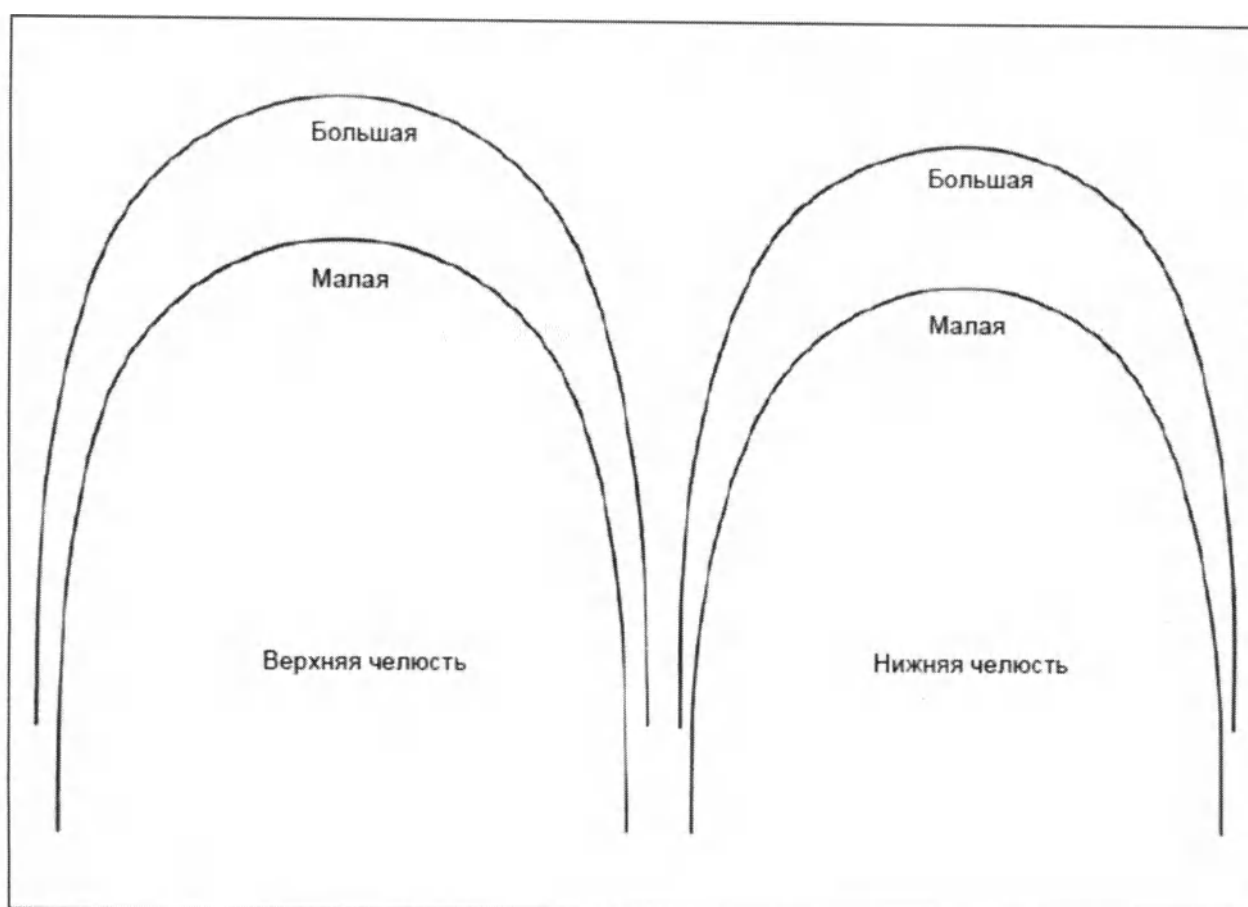

Материал:

Сплав нержавеющей стали, марка 17-4 Stainless Steel: Железо(Fe) – 73-75%, Хром(Cr) - 16-17.5%, Никель(Ni) – 3-4%, Медь(Cu) 3-4%. Производитель: Epson Atmix Corporation, Япония

- Брекеты металлические EPS SS Bracket
- Брекеты металлические Zeemas A Metal Bracket
- Дуга ортодонтическая стальная Sera Solid Stainless Steel Archwire

Нитинол, марка Nickel Titanium: Никель(Ni) 45-60%, Титан(Ti) 40-50%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

- Дуга ортодонтическая нитиноловая Quana SuperElastic NiTi Archwire
- Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная Ebba ThermalUltra NiTi Archwire

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

- Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная трехсиловая ThermalThree NiTi Archwire

Титан молибденовый сплав, марка Titanium: Титан(Ti) 50-99%, Молибден(Mo) 0-37%, Цирконий(Zr) 0-15%, Олово(Sn) 0-8%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

- Дуга ортодонтическая титаномолибденовая Tilda BIII/CNA/TMA Archwire

Технические характеристики

Твердость, по Виккерсу	129
Модуль упругости	193 - 200 ГПа
Прочность на растяжение, доходность	215 МПа
Плотность	8 г/см ³
Теплопроводность	16,2 Вт / мК
Прочность на сжатие	210 МПа
Предел текучести	210 МПа Мин
Прочность на разрыв	520 до 720 МПа
Прочность на изгиб	Не применим
Устойчивость к разрушению	Не применим
Жесткость	Не применим
Прозрачность	Не применим
Светопередача	Не применим
Светоотражающий индекс	Не применим
Аббе индекс и т.д.	Не применим

-НИТИНОЛОВЫЕ ДУГИ

-Дуги Tynilloy обеспечивают легкое воздействие, а так же поддерживают очень непрерывную и стабильную эластичность во время ортодонтического лечения. Каждая дуга в индивидуальной упаковке. Имеются две формы дуг.

-ТИТАНОМОЛИБДЕНОВЫЕ ДУГИ

Более гибкие, чем дуги из нержавеющей стали их легко сгибать, но не так как дуги Ni-Ti. Эти титаномолибденовые дуги подходит для пациентов с аллергией на металл. Процесс анодного окисления уменьшает вымывание металла и делает поверхность более гладкой. Ее прочность на разрыв делает дугу упругой.

Описание устройства:

Ортодонтическая дуга-устройство, предназначенное для использования в ортодонтическом лечении.

использование по назначению:

Дуга находится в пазах брекета и оказывает давление на зуб, заставляя его перемещаться.

Противопоказания:

1. Недостаточная гигиена полости рта у пациента
2. Неспособность пациента сотрудничать в плане лечения
3. Аллергия на компоненты продукта
4. Болезнь и основные условия, препятствующие ортодонтическому лечению

Предупреждения и предостережения:

1. Прекратите использовать его, если это неудобно.
2. Используйте ортодонтический воск, чтобы защитить губы и десны и сделать лечение более комфортным.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ


3. Только для одноразового использования. Повторное использование может привести к инфекции и снижению эффективности лечения.
4. Должно использоваться только профессиональным ортодонтом.
5. В случае если упаковка была повреждена, дуга требует предварительной обработки перед использованием.
6. Дуги ортодонтические, которые повреждены или не соответствуют спецификациям маркировки не должны использоваться.
7. Для пациентов с известными формами аллергиями выбирайте компоненты, которые не будут провоцировать аллергическую реакцию. В случае аллергической реакции немедленно удалить ортодонтический аппарат.
8. Хранить при комнатной температуре.

Для полного удовлетворения потребности врачей в функциональных и эстетических дугах, компания MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. выпускает дуги из нержавеющей стали, нитиноловых и титановых материалов. Специальный цвет ортодонтических дуг получил хорошую репутацию от врачей и пациентов. Все дуги изготавливаются только на нашем заводе в Тайвани.

- Мы предлагаем заготовку 35см прямой дуги или предварительно сформированные дуги. Предварительно сформированные дуги имеют большую или малую форму и находятся в отдельной упаковке.
- Стальные дуги очень эстетичный внешний вид.
- Возможно использование с брекетами двойных дуг.

Дуга ортодонтическая нитиноловая Quana NiTi

-Нитиноловые дуги обеспечивают легкое воздействие, а так же поддерживают очень непрерывную и стабильную эластичность во время ортодонтического лечения. Каждая дуга в индивидуальной упаковке. Имеются две формы дуг.

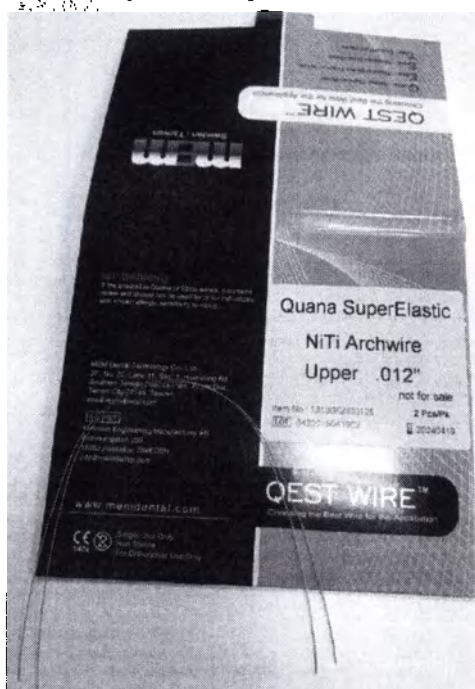


СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная Ebba Thermal NiTi



Дуга ортодонтическая стальная Sera Solid Stainless Steel Archwire

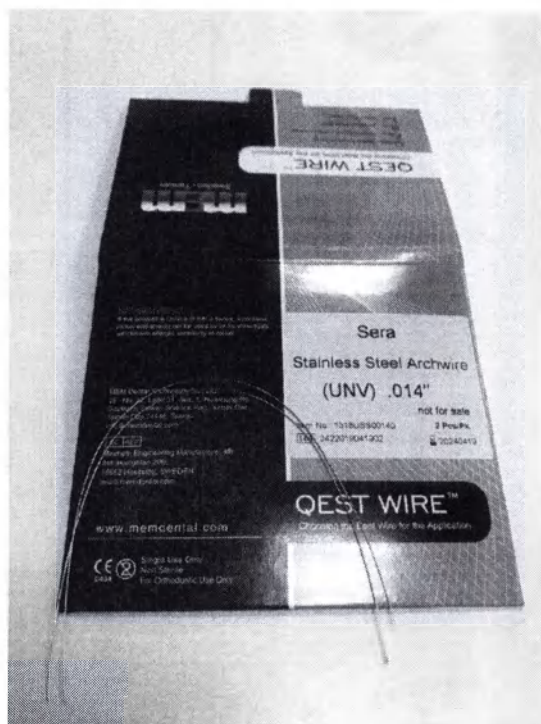

-Титанолибеновые дуги более гибкие, чем дуги из нержавеющей стали их легко сгибать, но не так как дуги Ni-Ti. Эти титанолибеновые дуги подходит для пациентов с аллергией на металл. Процесс анодного окисления уменьшает вымывание металла и делает поверхность более гладкой. Ее прочность на разрыв делает дугу упругой.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Применение:

- Внутренняя дуга лицевой дуги устанавливается в соответствующие трубки колец на верхних первых молярах.
- Припасовка по размеру осуществляется в области омега-петель на внутренней дуге. Для этого имеется специальный инструмент (щипцы для лицевой дуги).
- Наружная дуга с помощью силовых модулей соединяется с шейной тягой или головной шапочкой.

В большинстве случаев носить лицевую дугу рекомендуют около 12 часов в день на протяжении нескольких месяцев. Как правило, при лечении прикуса без удаления время увеличивается до 14 часов. Такие временные промежутки позволяют носить ортодонтическую конструкцию лишь в ночное время и исключить её ношение днем. Иногда при выравнивании зубов может возникнуть негативная реакция слизистой десневого края в виде отека, кровоточивости и гиперемии. Стоит немедленно обратиться к врачу-ортодонт для корректировки усилия и устранения всех неприятностей. Лицевая маска - ортодонтический аппарат, предназначенный для коррекции протрузий и интрузий. Конструкция лицевой маски выполнена с учетом анатомических особенностей для удобства и комфорта при использовании. Она имеет две опоры – на лбу и на подбородке или скулах. К дуге, которая располагается между лбом и подбородком, крепится

эластическая тяга. Другим концом тяга фиксируется на одном или нескольких зубах, нуждающихся в исправлении. Натягиваясь, она одновременно фиксирует маску на лице и выравнивает зубы. Участки кожи лица пациента, контактирующие с аппаратом "дышат" благодаря использованию в конструкции мягких материалов, обеспечивающих необходимую гигиену. При интенсивном ношении некоторые части аппарата можно менять в случае необходимости. Выпускается в ассортименте: универсальная маска с опорой на подбородке, маска с опорой на щеках, маска вертикальная большая или малая, маска горизонтальная большая или малая. Преимущества:

- слизистые не воспаляются, поскольку в полости рта отсутствуют конструкции с острыми углами,
- небольшой вес, что делает ношение маски весьма комфортным,
- удобство в использовании: маска легко снимается – без труда можно почистить зубы и очистить ортодонтическую конструкцию,
- высокая эффективность: маска позволяет в короткие сроки исправить патологии прикуса. Кроме того, с ней удобно работать и врачу, оценивая результаты лечения. Поскольку конструкция маски довольно проста, пациент может сам снимать ее на время сна, для ухода за полостью рта и за самой конструкцией, в среднем носить маску нужно несколько месяцев.

Маску нужно мыть теплой водой с мылом. После снятия внешней конструкции чистить зубы можно в обычном режиме. Срок лечения для каждого пациента индивидуален и определяется ортодонт. Подбородочная праща - ортодонтический аппарат, предназначенный для контроля развития нижней челюсти в раннем возрасте, с целью предотвращения её непропорционального роста относительно верхней челюсти, в случае, если данная аномалия имеет место.

Подбородочная праща является изделием совокупности знаний в области анатомии человека и передовых технологий ортодонтии. Представляет собой каппу из пластмассы, охватывающую подбородок и присоединяющуюся к головной шапочке или шейной тяги посредством эластических резиновых колец. Используется для лечения прогенического и открытого прикуса. В первом случае эластическая тяга будет косая кзади, во втором – вертикальная кверху. Подбородочную прашу рекомендуют одевать, как правило, во время ночного сна, так же возможно ее ношение все свободное время дома. Результаты ортодонтического лечения зависят от дозировки и продолжительности силы, от степени интенсивности обменных процессов в костной ткани (пластических способностей). Используют подбородочную прашу в период временного и сменного прикуса.

11. РАСШИФРОВКА ПОЗИЦИЙ БРЕКЕТОВ*

U1L - верхний левый центральный резец

U1R - верхний правый центральный резец

U2R - верхний боковой правый резец

U2L - верхний боковой левый резец

U3R - верхний правый клык

U3L - верхний левый клык

U4 - верхний первый премоляр

U5 - верхний второй премоляр

L1,2 - нижний центральный, нижний боковой резец

L3R - нижний правый клык

L3L - нижний левый клык

L4 - левый первый премоляр

L5 - левый второй премоляр

U2/L1,2 - верхний боковой резец/нижний центральный, нижний боковой резец

U/L3,4,5 - верхний/нижний клык, первый премоляр, второй премоляр

U1 - верхний центральный резец

UR1 - верхний правый центральный резец

UL1 - верхний левый центральный резец

UR2 - верхний правый боковой резец

UL2 - верхний левый боковой резец

UR3 - верхний правый клык

UL3 - верхний левый клык

UR4 - верхний правый первый премоляр

UL4 - верхний левый первый премоляр

UR5 - верхний правый второй премоляр

UL5 - верхний левый второй премоляр

UL3/LR3 - верхний левый клык/нижний правый клык

UR3/LL3 - верхний правый клык/нижний левый клык

LR3 - нижний правый клык

LL3 - нижний левый клык

LR4 - нижний правый первый премоляр

LL4 - нижний левый первый премоляр

UR6 - верхний правый первый моляр

UL6 - верхний левый первый моляр

UL/LR6 - верхний левый первый моляр/нижний правый первый моляр

UR/LL6 - верхний правый первый моляр/левый нижний первый моляр

LR6 - нижний правый первый моляр

LL6 - нижний левый первый моляр

UL/LR7 - верхний левый/нижний правый второй моляр

UR/LL7 - верхний правый/нижний левый второй моляр

UL7 - верхний левый второй моляр

UR7 - верхний правый второй моляр

LR7 - нижний правый второй моляр

LL7 - нижний левый второй моляр

12.РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для системы ортодонтической регулируемой компания MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. не выполняет установку или техническое обслуживание своей продукции, которая предназначена только для ортодонтического и стоматологического использования и должна использоваться квалифицированным персоналом ортодонтом. Тем не менее компания MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. обязуется оказывать техническую помощь в решении любых возможных проблем от клиентов. Адрес электронной почты: info@memdental.com.

13.МАТЕРИАЛЫ

Контакт со слизистой оболочкой ротовой полости и эмалью зуба, продолжительный:

1. Оксид алюминия, марка Al₂O₃ - 99,998%, Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

- Брекеты керамические самолигирующие Genius C
- Брекеты керамические Zeemas C Ceramic Bracket

2. Кобальт хромовый молибденовый сплав, марка Cobalt Chromium Molybdenum Alloys: Кобальт(Co) - 63-68%, Хром(Cr) - 27-30%, Молибден(Mo) - 5-7%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань

- Брекеты металлические самолигирующие Genius System SLB
- Брекеты металлические самолигирующие Heimas mini

3. Сплав нержавеющей стали, марка 17-4 Stainless Steel: Железо(Fe) - 73-75%, Хром(Cr) - 16-17,5%, Никель(Ni) - 3-4%, Медь(Cu) 3-4%. Производитель: Epson Atmix Corporation, Япония

- Брекеты металлические EPS SS Bracket
- Брекеты металлические Zeemas A Metal Bracket
- Дуга ортодонтическая стальная Sera Solid Stainless Steel Archwire

4. Сплав нержавеющей стали, марка 304L: Углерод(C) - 0,03%, Кремний(Si) - 0,8%, Марганец(Mn) - 2%, Никель(Ni) - 10,5-12,5%, Сера(S) - 0,02%, Фосфор(P) - 0,035%, Хром(Cr) - 17-19%, Железо(Fe) - 67%. Производитель: Mistubishi Steel MFG. Co., LTD., Япония

- Щечная замок-трубка Buccal Tube Bondable

5. Нитинол, марка Nickel Titanium: Никель(Ni) 45-60%, Титан(Ti) 40-50%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань


- Дуга ортодонтическая нитиноловая Quana SuperElastic NiTi Archwire
- Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная Ebba ThermalUltra NiTi Archwire
- Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная трехсильная ThermalThree NiTi Archwire

6. Титан молибденовый сплав, марка Titanium: Титан(Ti) 50-99%, Молибден(Mo) 0-37%, Цирконий(Zr) 0-15%, Олово(Sn) 0-8%. Производитель: MEM Dental Technology Co., Ltd, Тайвань


- Дуга ортодонтическая титаномолибденовая Tilda BIII/CNA/TMA Archwire

14. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ


Информация об основных стадиях проектирования медицинского изделия и производственных процессах.

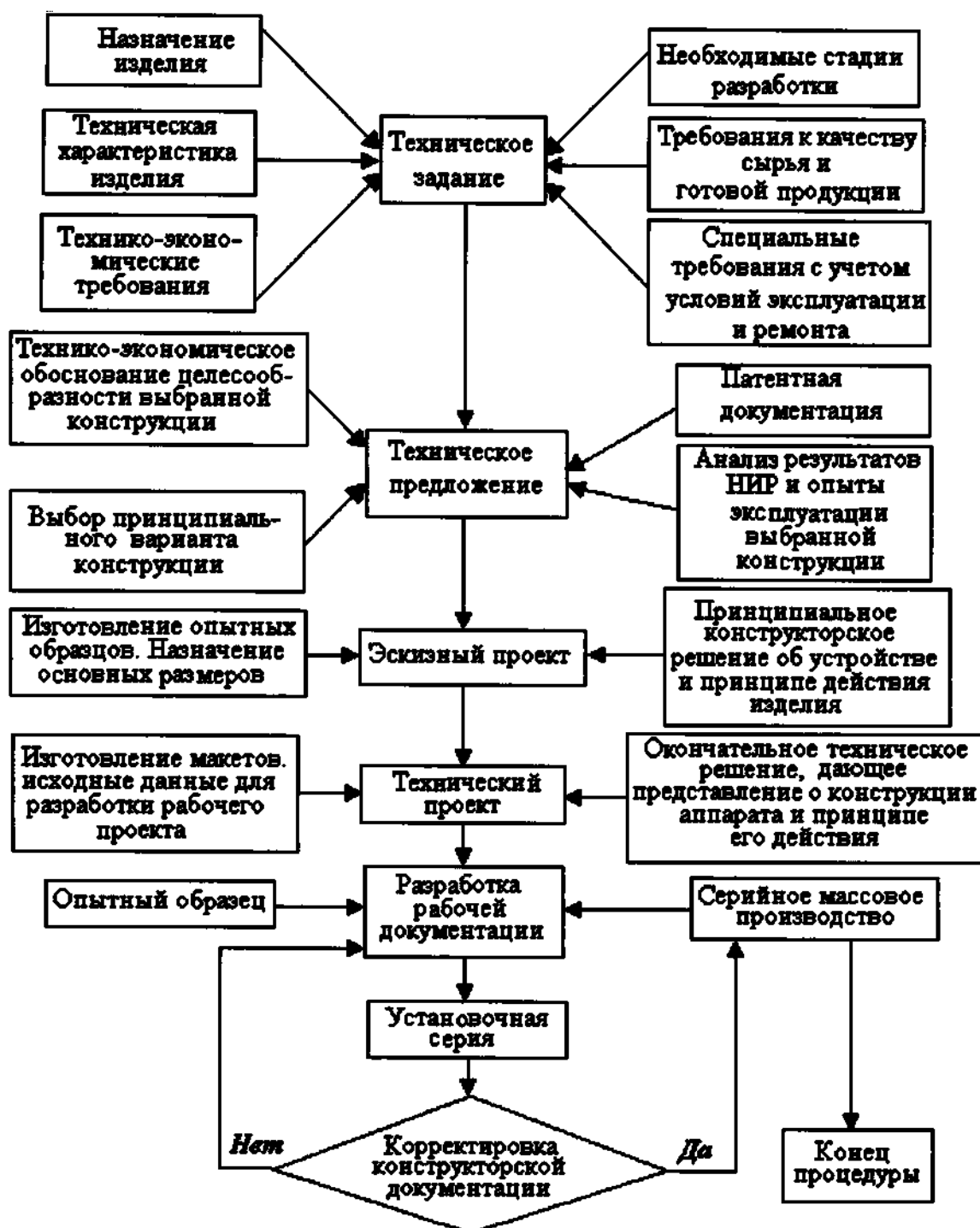


Брекет керамический самолигирующий Genius C

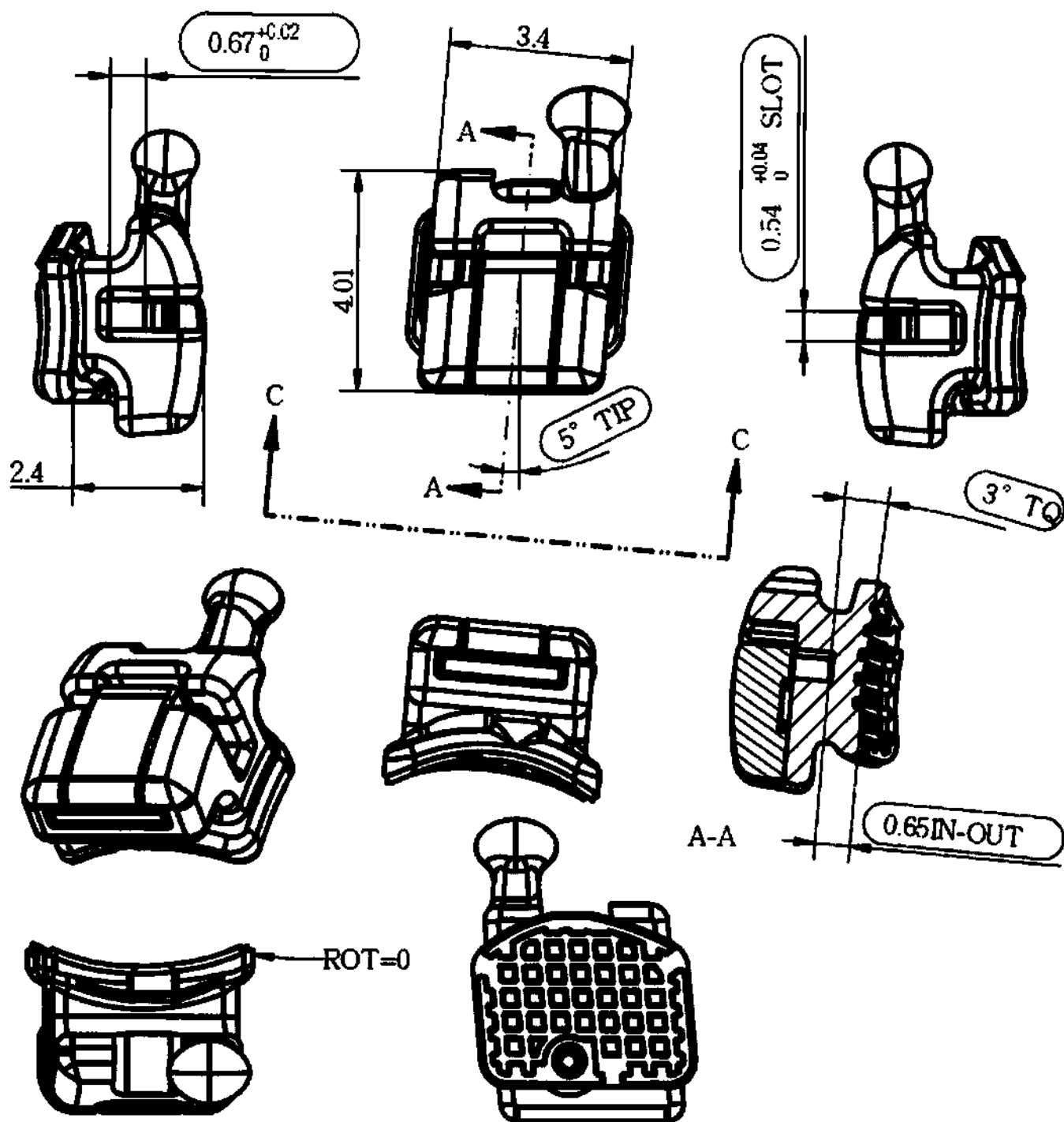


Брекет металлический EPS SS Bracket

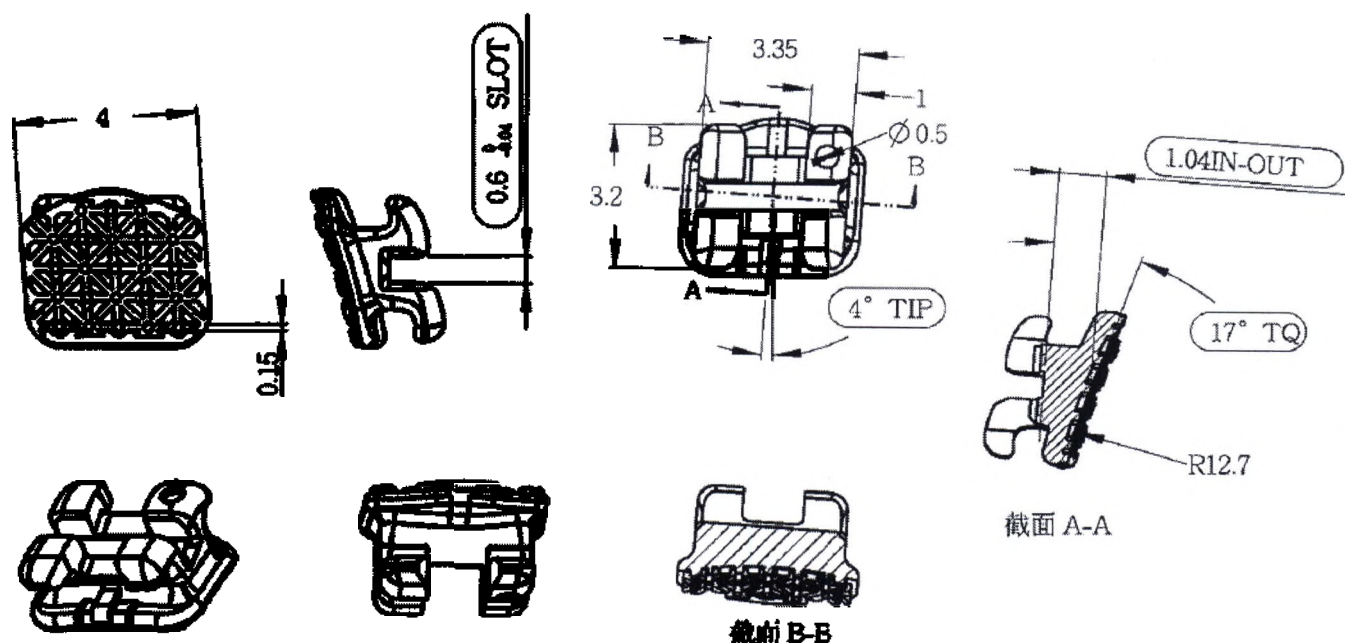

Брекет металлический самолигирующий Genius System

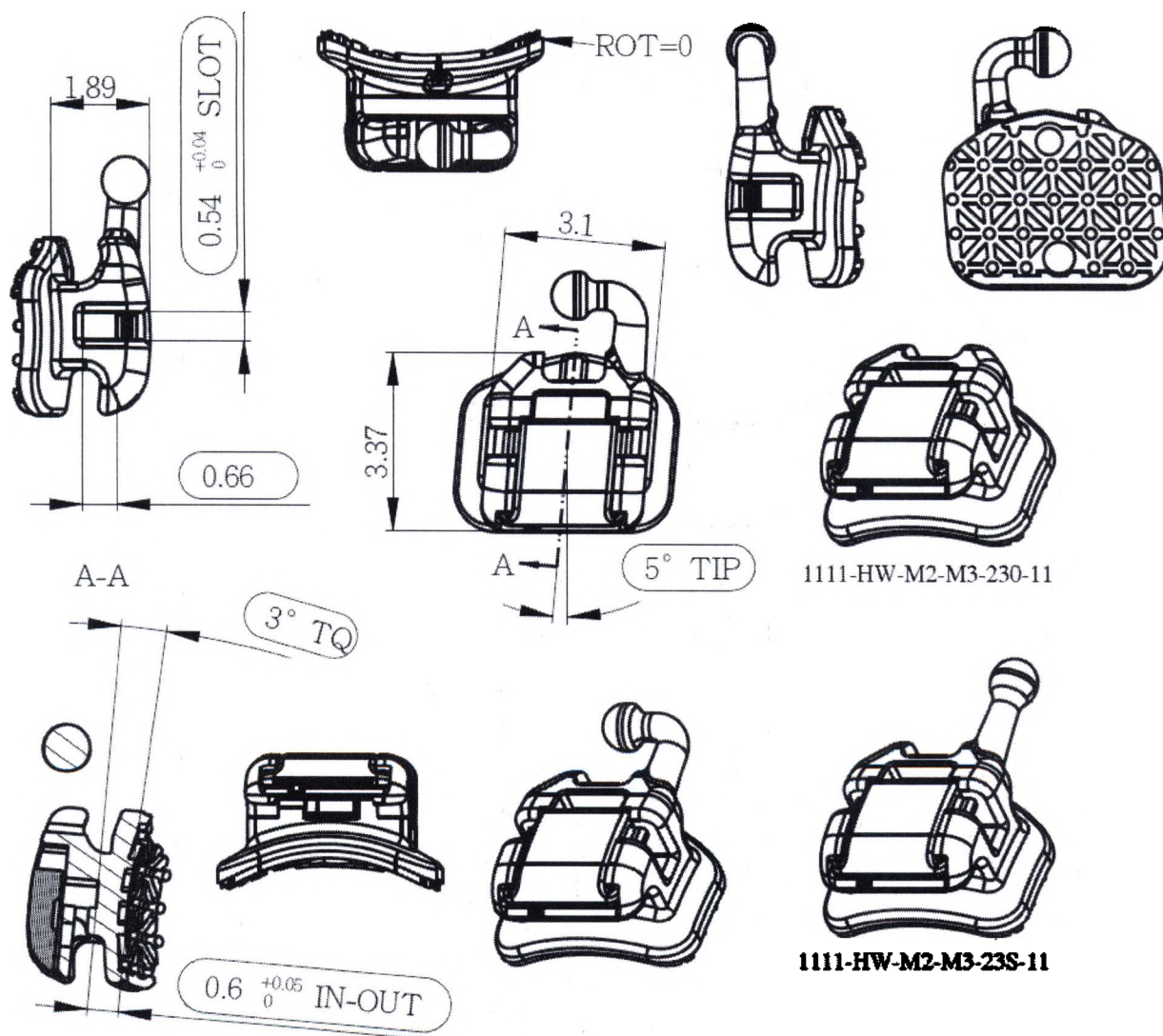


Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE

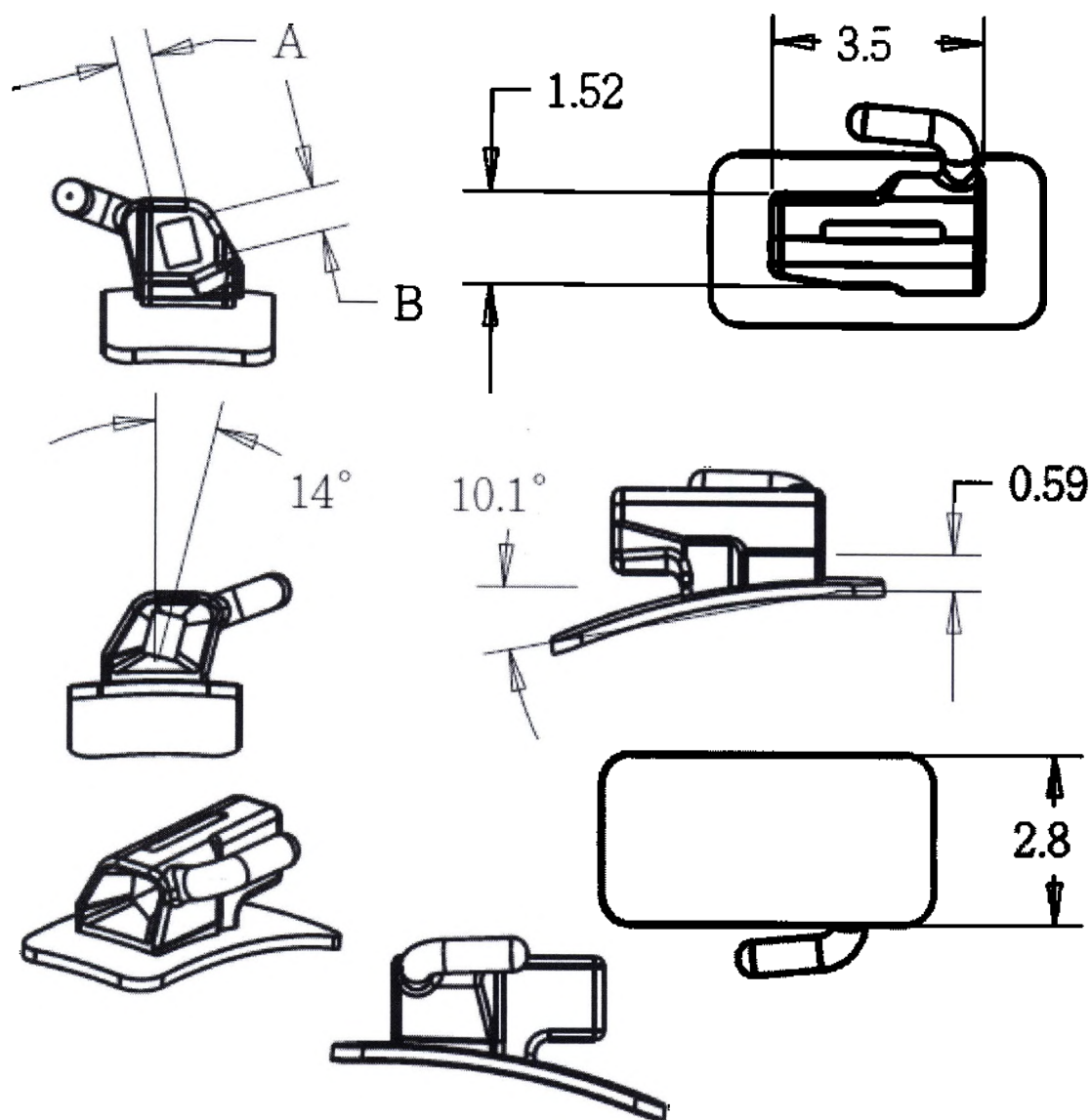

15. ПРимеры Упаковки

Брекет керамический самолигирующий Genius C


Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

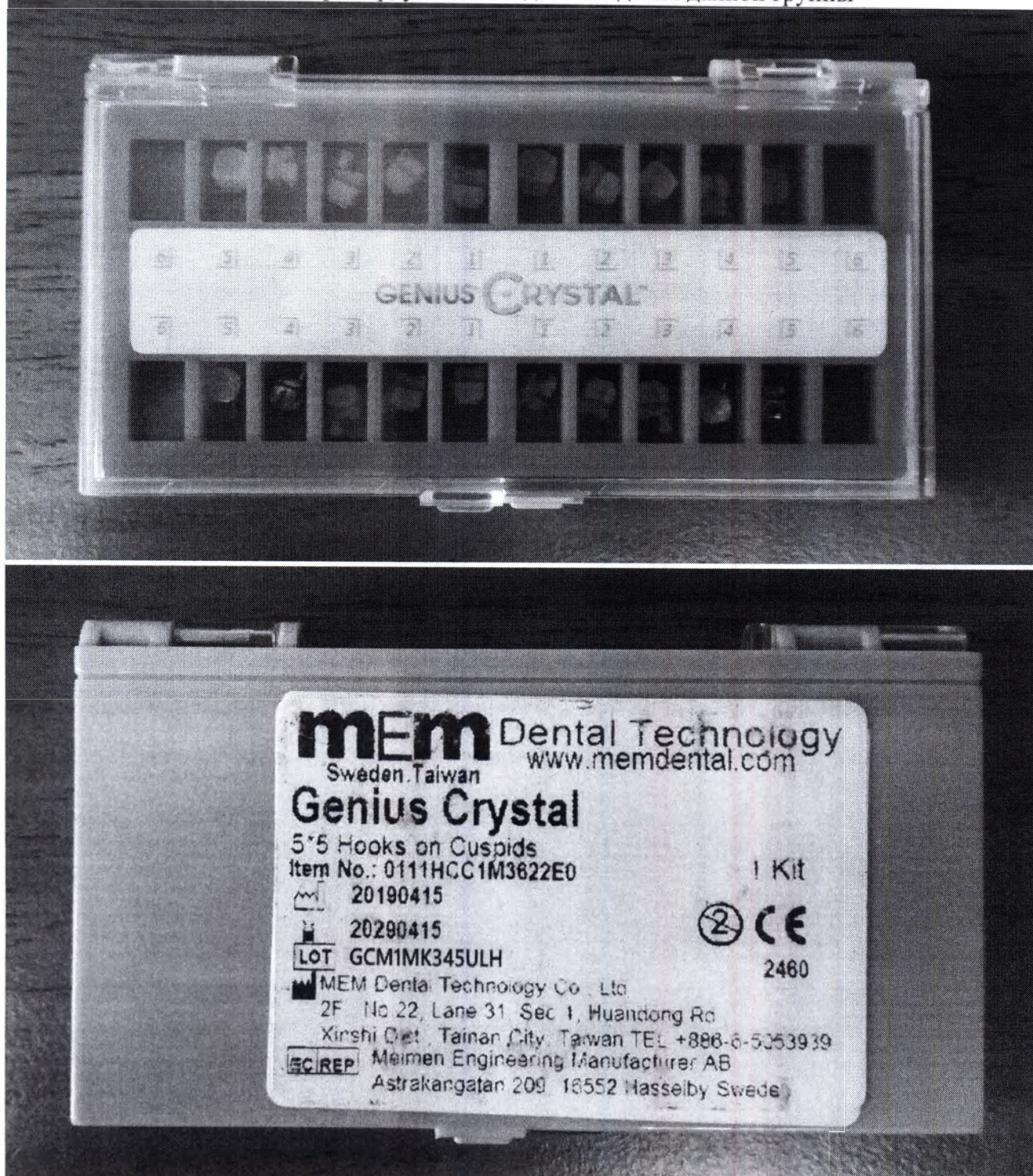

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ


Брекет металлический самолигирующий Genius System

Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

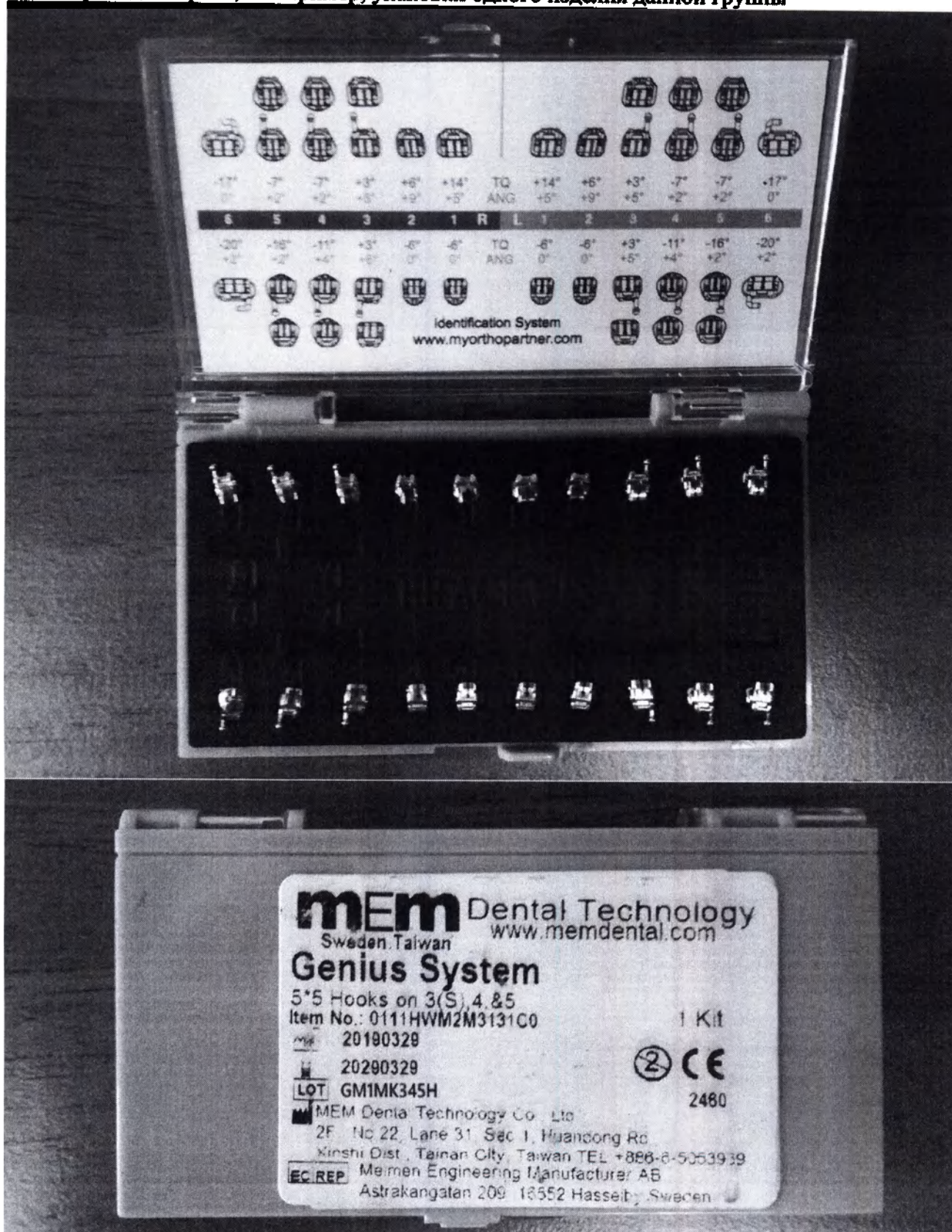

Брекет металлический самолигирующий Heimas mini


Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

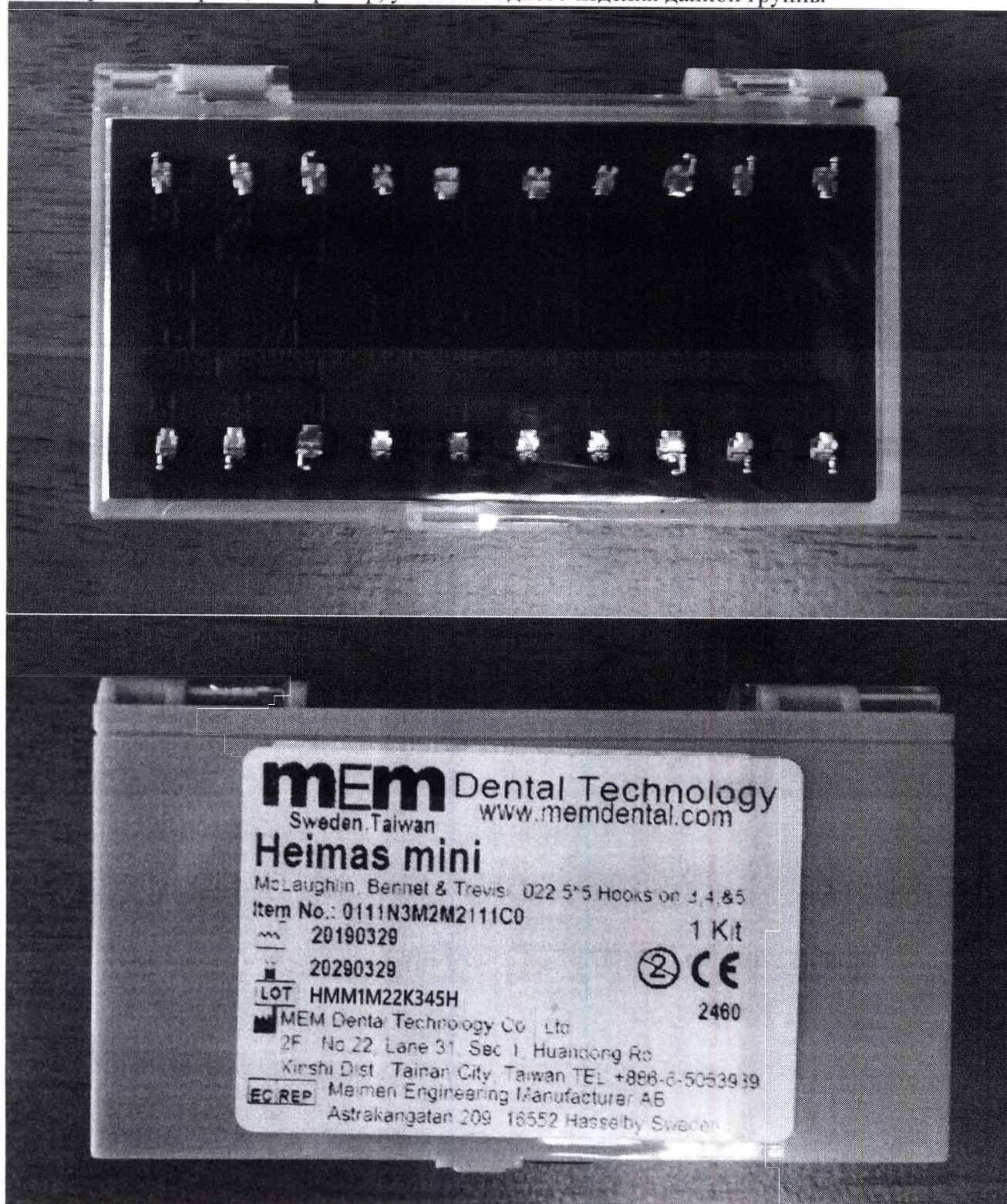

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Брекет металлический EPS SS Bracket


Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

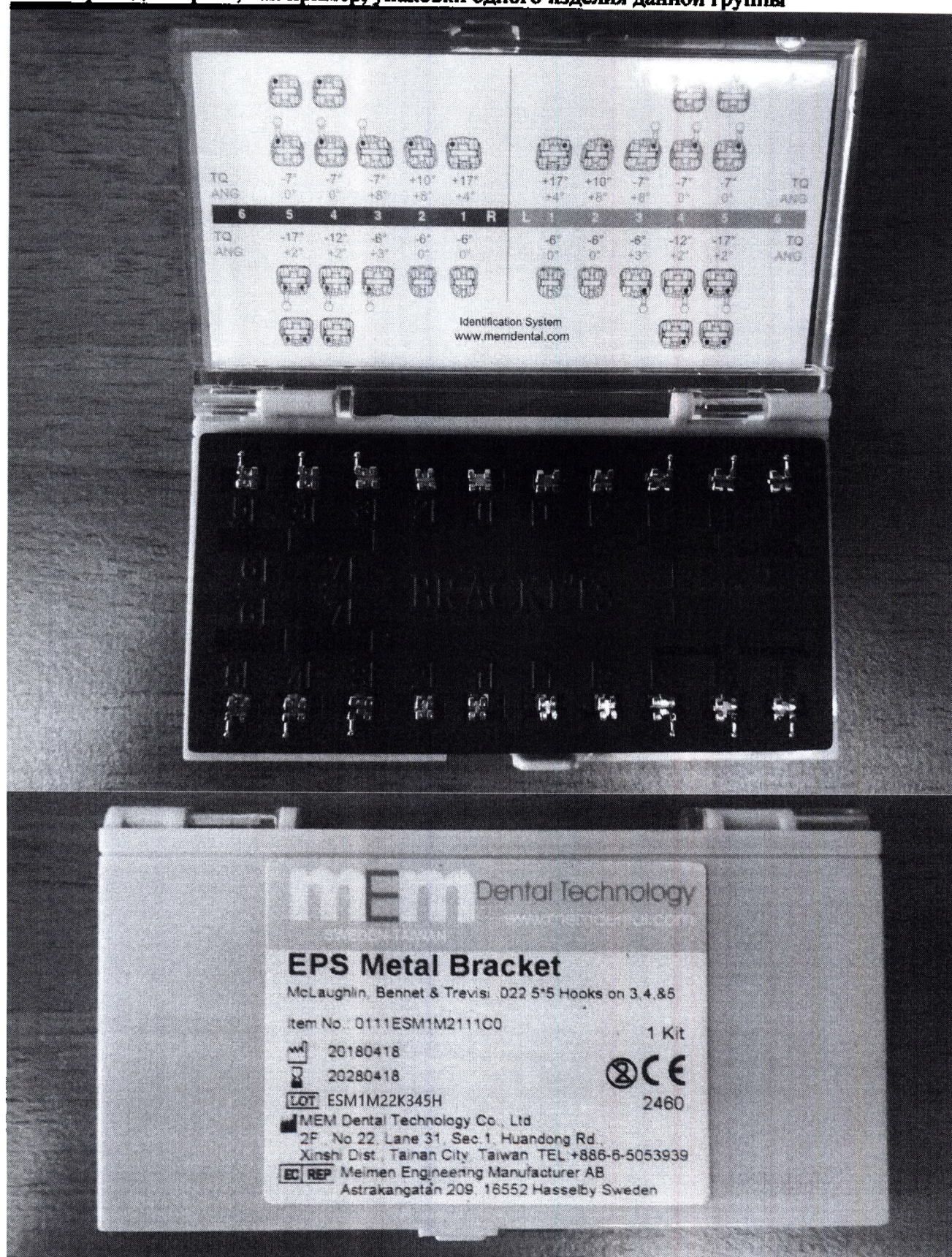

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Брекет металлический Zeemas A Metal Bracket

Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

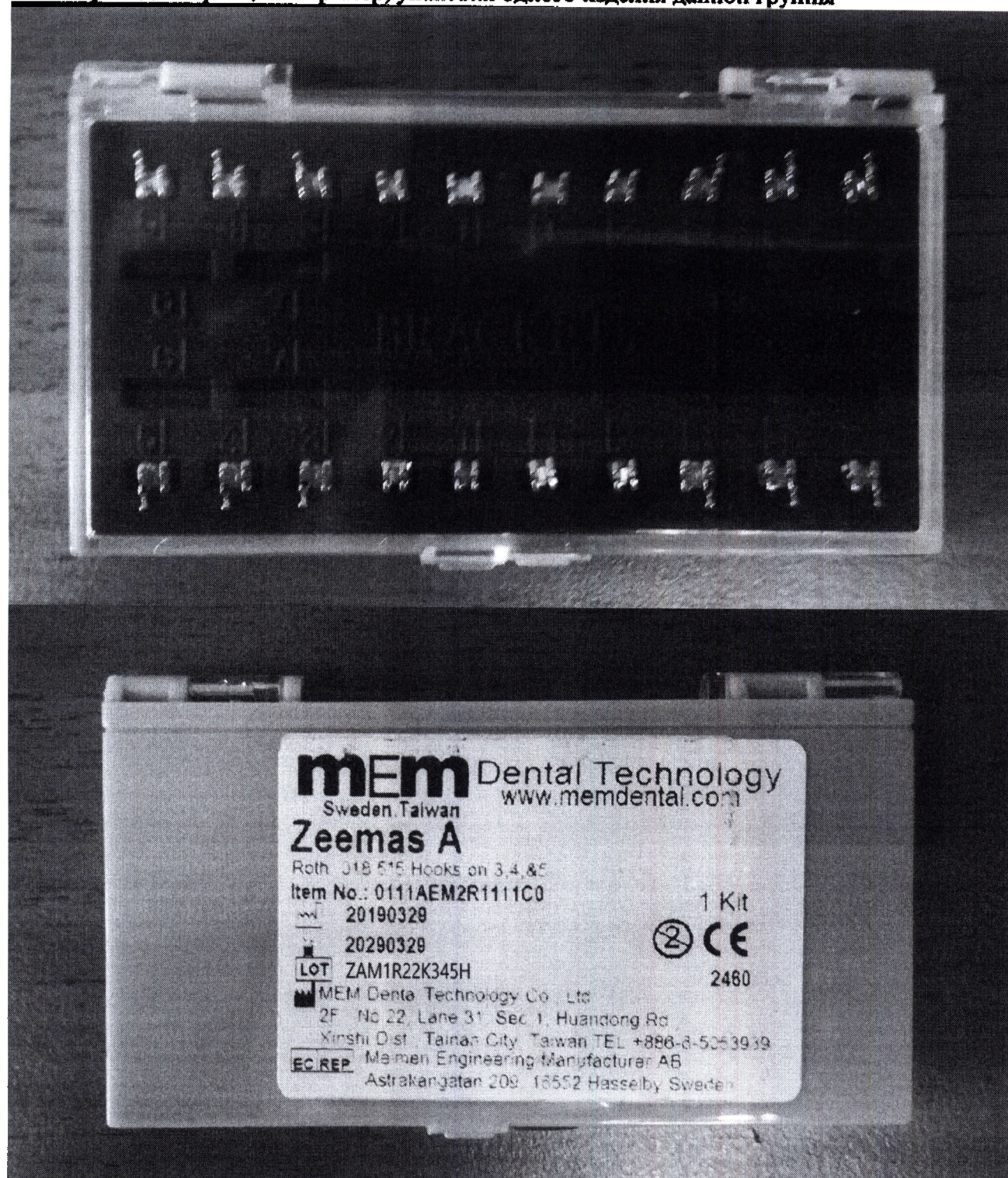

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Брекет керамический Zeemas C Ceramic Bracket

Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы



Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE


Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы



СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ


Дуга ортодонтическая нитиноловая Quana NiTi

Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

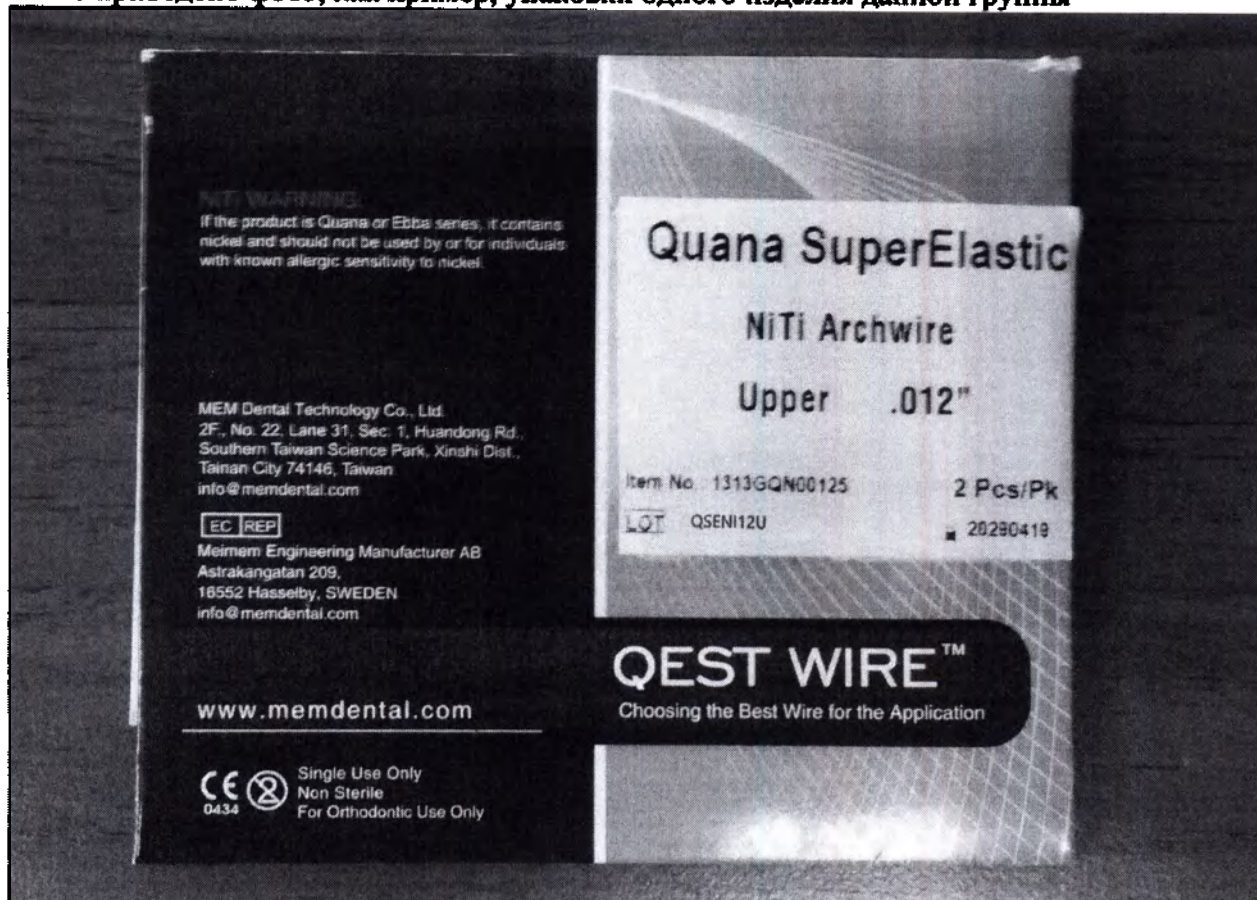

Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная Ebba Thermal NiTi

Ниже приведено фото, как пример, упаковки одного изделия данной группы

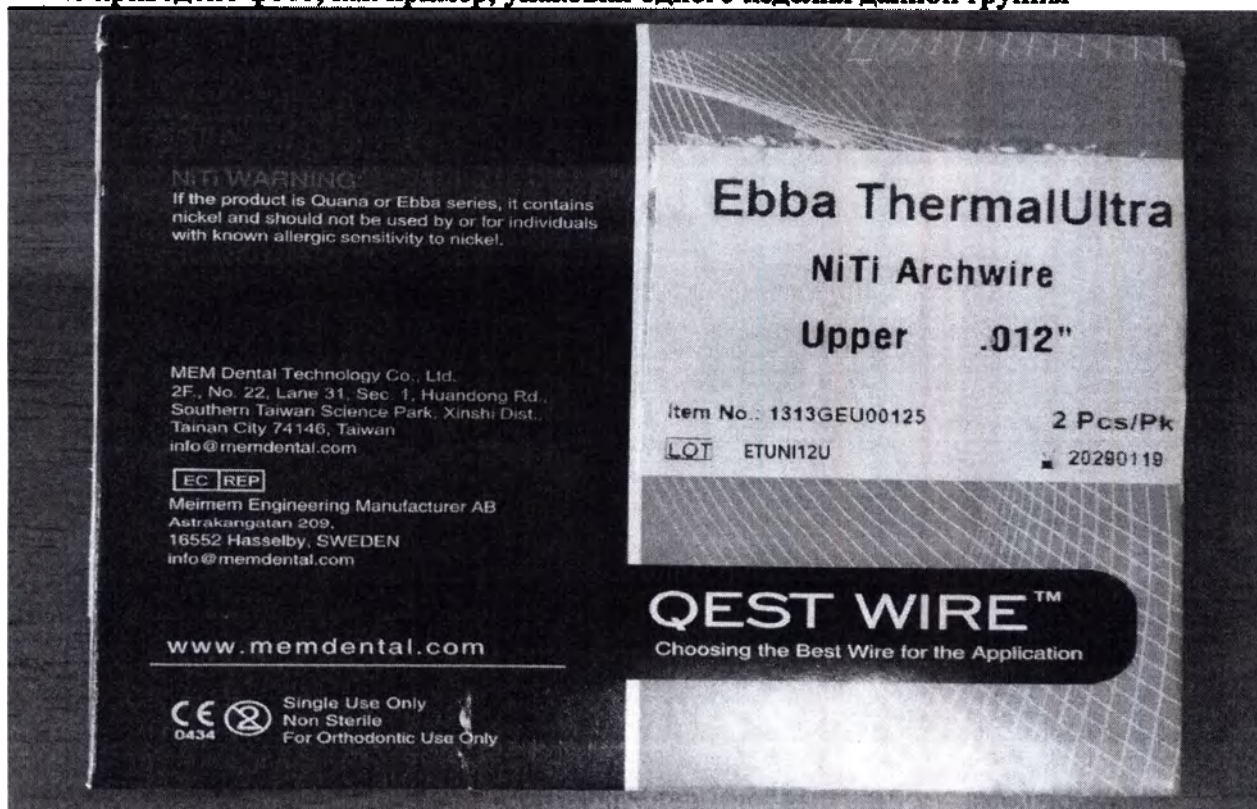

16. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товарный знак предприятия-изготовителя	
Номер партии	
Запрет повторного использования	
Маркировка CE (в соответствии с директивой ЕС 93/42/ЕЭС)	
Производитель	
Дата производства	
Дата окончания срока годности	
Представитель на территории ЕС	
Лот номер	

17.МАРКИРОВКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Брекет керамический самолигирующий Genius C

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mEm

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах
исполнения

Брекет керамический самолигирующий Genius C

5*5 с крючком на клык

Серийный номер: 011HCC1M3622E0

1 набор



20190415



20290415



CE

2460



GCM1MK345ULH



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

Брекет металлический самолигирующий Genius System

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mEm

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах
исполнения

**Брекет металлический самолигирующий Genius
System**

5*5 с крючком 3(S),4,&5

Серийный номер: 0111HWM2M3131C0

1 набор



20190329



20290329



CE
2460

LOT

GM1MK345H



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

Брекет металлический самолигирующий Heimas mini

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mem

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах
исполнения

**Брекет металлический самолигирующий Heimas
mini**

McLaughlin, Bennet & Trevisi .022 5*5 с крючком 3,4,&5

Серийный номер: 0111N3M2M2111C0

1 набор



20190329



20290329



CE
2460

LOT

HMM1M22K345H



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Брекет металлический EPS SS Bracket

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mem

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения

Брекет металлический EPS SS Bracket

McLaughlin, Bennet & Trevisi .022 5*5 с крючком 3,4,&5

Серийный номер: 0111ESM1M2111C0

1 набор



20180418



20280418



CE
2460



ESM1M22K345H



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

Брекет металлический Zeemas A Metal Bracket

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mem

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения

Брекет металлический Zeemas A Metal Bracket

McLaughlin, Bennet & Trevisi .022 5*5 с крючком на клык

Серийный номер: 0111AEM2R1111C0

1 набор



20190329



20290329



CE

2460

LOT ZAM1R22K345H



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

Брекет керамический Zeemas C Ceramic Bracket

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mEm

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах
исполнения

Брекет керамический Zeemas C Ceramic Bracket

McLaughlin, Bennet & Trevisi .022 5*5 с крючком на клык

Серийный номер: 0111ESM1M2111C0

1 набор



20180418



20280418



2460

LOT ZCM1M22K3H



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

mem

Dental Technology

www.memdental.com

Тайвань

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения

Щечная замок-трубка BUCCAL TUBE

Bondable UR7 MBT .018 Sgl Nonconv

Серийный номер: 1312B12M1171

10 шт.



20190425



20290425



2460



B12NCR1817



2F & 4F, NO.22 and 2F, NO.26, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., XINSHI
DIST., TAINAN CITY, TAIWAN Tel +886 6 505 3939

Представитель на территории РФ: ООО "ОМЕГАОРТО" 197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А Тел. +7 (812) 335-02-55

Дуга ортодонтическая нитиноловая Quana NiTi

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения

Quana SuperElastic NiTi Archwire

Upper .012"

Серийный номер: 1313GQN00125

10 шт.



QSENI12U



20290419

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Дуга ортодонтическая нитиноловая термоактивная Ebba Thermal NiTi

Ниже приведен пример маркировки для одного из изделий

Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения

Ebba ThermalUltra NiTi Archwire

Upper .012"

Серийный номер: 1313GEU00125

10 шт.

 ETUNI12U

 20290119

18. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение

Хранить не вскрытые упаковки следует при нормальных условиях. Нормальным считается хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5 до +30 °С или, в зависимости от климатических условий, до +40°С. Относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации.

Атмосферное давление от 5 кПа до 105 кПа.

Интенсивный свет должен быть исключен. Медицинские изделия нельзя использовать по истечении срока годности. Хранение в упаковке производителя 10 лет с даты изготовления.

Хранить в местах недоступных для детей!

Изделия можно использовать только в случае, если упаковка не была повреждена.

Транспортировка

Изделия могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств при температуре от +5 до +30 °С или, в зависимости от климатических условий, до +40°С. Относительная влажность от 5% до 95%.

Атмосферное давление от 5 кПа до 105 кПа.

При транспортировке и хранении изделия не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Компания MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. и авторизованные представители не выполняют установку или техническое обслуживание своей продукции, которая предназначена только для ортодонтического и стоматологического использования и должна использоваться квалифицированными ортодонтами и юридически квалифицированным персоналом. Тем не менее компания MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. обязуется оказывать техническую помощь в решении любых возможных проблем от клиентов.

**Представитель на Территории Российской Федерации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГАОРТО"**

197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А

20.СРОК ГОДНОСТИ

Хранение в наборе производителя 10 лет с даты изготовления.

Медицинские изделия нельзя использовать по истечении срока годности, указанной на упаковке.

Изделия можно использовать только в случае, если упаковка не была повреждена.

21.УТИЛИЗАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После использования Ортодонтической системы, помещают в контейнер для использованных предметов. Дальнейшая утилизация проводится в соответствии с нормами, установленными законом и местными положениями, как отходы класса А в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. Согласно вещественного состава Ортодонтической и Стоматологической Продукции компании MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD., отходы, образующиеся после или до конечного использования, не требуют особых условий утилизации, при ее производстве учтены все варианты управления минимизацией их воздействия на окружающую среду. Ниже приведены некоторые типичные условия утилизации ортодонтической и стоматологической продукции:

- обычные коммерческие отходы, списывают на свалку или, где это возможно, перерабатываются или компостируются, такие как пластик, бумага, стекло упаковочные отходы и пластик, металл, диагностическое и лабораторное немедицинское изделие, контролируемые отходы, обычно списывают на полигон или, где это возможно, перерабатываются или компостируются, в конце терапии после процедуры дезактивации, такие как изделия одноразового использования или изношенные изделия повторного использования.
- специальные отходы, как правило, сжигаются через специализированное управление отходов или списываются через специализированное управление на полигон, через сайт для опасных отходов, предварительно обрабатываются, или после переработки частично разряжаются специализированными процедурами, такие как изделия с комплексным биологическим мусором, зараженными клиническими отходами, устаревшими опасными изделиями, которые должны быть утилизированы, согласно соответствующим материалам паспорта безопасности.

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов, принятой на административной территории, отходы класса Б обеззараживаются персоналом данной организации в местах их образования химическими/физическими методами.

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.

СИСТЕМА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ В НАБОРАХ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

Для сбора органических, жидких отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости с крышками (контейнеры), обеспечивающими их герметизацию и исключающими возможность самопроизвольного вскрытия.

В случае применения аппаратных методов обеззараживания в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, на рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в общие емкости (контейнеры, пакеты), использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным отделением игл (для отделения игл необходимо использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, перевязочного материала и так далее.

22. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае несоблюдения инструкций любая ответственность исключается.

Вся продукция компании, такая как ортодонтические и стоматологические медицинские изделия, инструменты и аксессуары, предназначены для только

ортодонтического и стоматологического использования и должна использоваться квалифицированным, в том числе юридически, персоналом. Пользователи должны применять продукцию в соответствии с назначением, определенным изготовителем. Использование изделий одновременно разных производителей целевого назначения квалифицируется как незаконные: производитель не несет ответственности за повреждения, вытекающие из такого использования как временного, частичного, так и полного, а для конечного пользователя и даже дистрибьюторов несущих ответственность, существует предупреждение от изготовителя в инструкции, которое невозможно изменить.,

MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет и гарантирует:

- соответствие основным требованиям, Директивы на медицинские приборы 93/42ЕЕС и последующих его модификациях - проектирования, изготовления и окончательной проверки, осуществления в

соответствии с качеством Системы менеджмента ИСО 13485 в соответствии с Директивой 93/42ЕЕС, обязательство ведения учета технической документации доступно компетентному органу, в течение, по крайней мере 10 лет с даты производства для ортодонтических металлических изделий и не менее 7 лет для ортодонтических неметаллических изделий.

- обязательство предоставлять соответствующие компоненты и аксессуары продукции на весь срок ее службы:

- обязательство оказывать техническую помощь в решении любых возможных проблем от клиентов.

Продукция соответствует следующим национальным стандартам:

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»,

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»,

ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий:

- часть 1 «Оценка и исследование»;

- часть 10 «Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Приготовление проб и контрольные образцы»,

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Требования к обращению с животными».

ГОСТ Р 52770-2020 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Часть 1. Общие требования биологической безопасности».

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;

ГОСТ 31576-2012 «Оценка биологического действия медицинских стоматологических материалов. Классификация и приготовление проб»;

ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы».

В случае обнаружения любой неисправности или повреждения упаковки при поставке, необходимо обратиться к уполномоченному производителю на Вашей территории.


23. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На территории Российской Федерации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГАОРТО"

197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40, лит. А, офис 304А

Approved

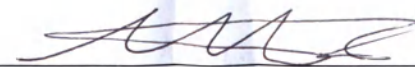

Signature

President: Tsung Che Wei

Инструкция по применению

Наименование изделия: Система ортодонтическая регулируемая в наборах, в вариантах исполнения

Применимая директива: Директива ЕС об изделиях медицинского назначения (93/42/ЕЕС)

№ документа: AUW-D3-UM-01

Дата проверки: 01.02.2021 г.

Редакция №: 1.18 Рус

Производитель:

**MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. («МЕМ ДЕНТАЛ
ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.»)**
2F, NO. 22, LN.31, SEC.1, HUANDONG RD., SOUTHERN TAIWAN, SCIENCE PARK,
XINSHI DIST., TAINAN CITY 741, TAIWAN, R.O.C.
ТЕЛ:/ФАКС: +886 6 505 3939 / +886 6 505 1212

Утверждено
/подпись/
Директор: Цунг Че Вей

Подпись

СОБСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

110 Настоящий готовый документ нотариальной конторы окружного суда района Тайнань, Тайвань

Дело № 000217

Дата: 26 февраля 2021 г.

Удостоверено в Нотариальной конторе Ю-ЧЕН ЦАЙ, Тайвань, Окружной суд Тайнаня, ТАЙВАНЬ, что подпись/печать Директора MEM DENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. («MEM ДЕНТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.») ЦУНГ ЧЕ ВЕЙ на этом документе является подлинной.

Нотариус:

/подпись/
Ю-Чен Цай

No.207, Jhonghua 2nd Rd., Yongkang Dist., Tainan, Taiwan R.O.C.
(Адрес: № 207 Ихунхуа 2, р-н Юнкан, Тайнань, Тайвань, Китайская Республика)

Удостоверено

/подпись/ Подпись

Президент: Цунг Че Вей


Перевод данного текста выполнен переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого марта две тысячи двадцать первого года.

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2021-15-1247

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



 В. К. Корсик

Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 99 лист(а)(ов)

Нотариус



