



ИНСТРУКЦИЯ

По применению изделий медицинского назначения **«СРЕДСТВА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ БЕЗВОРСОВЫЕ СОРБЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ПОЛИВИНИЛФОРМАЛЯ «ФАРМАСОРБ»»**

1. Назначение.

Средства перевязочные безворсовые сорбционные на основе пористого поливинилформалья «Фармасорб» в виде тупферов, турунд и салфеток производства ООО «НИИ ПЦ СМ» предназначены для использования в различных областях хирургии; сердечно-сосудистой, нейрохирургии, абдоминальной, челюстно-лицевой, офтальмологии, для осушения операционного поля, а также в качестве дренажных тампонов для дренирования жидкостей и заполнения полостей при удалении гемо- и влаговывделений, при остановке сильных кровотечений, и в качестве основы повязок в сочетании с растворами лекарственных препаратов.

2. Технические характеристики.

Данные изделия изготавливаются на основе гидрофильного, синтетического, пористого полимерного материала, у которого поры и полимерная основа образуют между собой взаимопроникающие непрерывные трёхмерные сетки.

Пористая структура безворсовых перевязочных средств состоит из двух систем пор: макропор, имеющих размер от 10 до 1000 мкм; и микропор - с размером от 0.1 до 10 мкм.

Изделия выпускаются разных типоразмеров согласно ТУ 9393-003-22728400-2011.

Изделия в упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Изделия (в стерильном исполнении) должны быть стерильны.

Стерилизация осуществляется:

- радиационным методом по ГОСТ Р ИСО 11137 – 2000
- оксидом этилена по ГОСТ Р ИСО 11135 - 2000

Срок хранения стерильных изделий 5 лет с даты стерилизации.

3. Противопоказания к применению.

Противопоказаний к применению данных изделий медицинского назначения не выявлено.


4. Подготовка к работе изделия и порядок работы.

- Выбрать необходимое изделие.
- Проверить упаковку на наличие механических повреждений (если упаковка повреждена дальнейшее использование изделия **ЗАПРЕЩЕНО**).
- извлечь изделие из упаковки.
- использовать по назначению.

5. Правила транспортировки и хранения.

Изделия могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Группа условий транспортирования 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.


Старший инженер

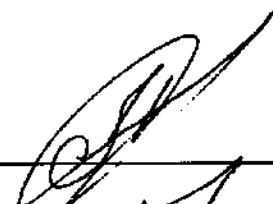

О.С. Артюх

Заведующий офтальмологическим
отделением клинической больницы
ПО «АВТОПРИБОР» и «ТОЧМАШ»



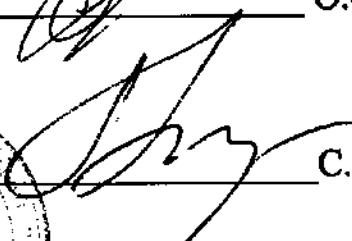

С.В. Корнев

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

2 (два) лист а

Генеральный директор Зиновьев В.В.





ИНСТРУКЦИЯ

По применению изделий медицинского назначения
**«СРЕДСТВА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ БЕЗВОРСОВЫЕ
 СОРБЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО
 ПОЛИВИНИЛФОРМАЛЯ «ФАРМАСОРБ»»**

1. Назначение.

Средства перевязочные безворсовые сорбционные на основе пористого поливинилформала «Фармасорб» в виде тупферов, турунд и салфеток производства ООО «НИ И ПЦ СМ» предназначены для использования в различных областях хирургии; сердечно-сосудистой, нейрохирургии, абдоминальной, челюстно-лицевой, офтальмологии, для осушения операционного поля, а также в качестве дренажных тампонов для дренирования жидкостей и заполнения полостей при удалении гемо- и влаговыведений, при остановке сильных кровотечений, и в качестве основы повязок в сочетании с растворами лекарственных препаратов.

2. Технические характеристики.

Данные изделия изготавливаются на основе гидрофильного, синтетического, пористого полимерного материала, у которого поры и полимерная основа образуют между собой взаимопроникающие непрерывные трёхмерные сетки.

Пористая структура безворсовых перевязочных средств состоит из двух систем пор: макропор, имеющих размер от 10 до 1000 мкм; и микропор - с размером от 0.1 до 10 мкм.

Изделия выпускаются разных типоразмеров согласно ТУ 9393-003-22728400-2011.

Изделия в упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Изделия (в стерильном исполнении) должны быть стерильны.

Стерилизация осуществляется:

- радиационным методом по ГОСТ Р ИСО 11137 – 2000
- оксидом этилена по ГОСТ Р ИСО 11135 - 2000

Срок хранения стерильных изделий 5 лет с даты стерилизации.

3. Противопоказания к применению.

Противопоказаний к применению данных изделий медицинского назначения не выявлено.

4. Подготовка к работе изделия и порядок работы.

- Выбрать необходимое изделие.
- Проверить упаковку на наличие механических повреждений (если упаковка повреждена дальнейшее использование изделия **ЗАПРЕЩЕНО**).
- извлечь изделие из упаковки.
- использовать по назначению.

5. Правила транспортировки и хранения.

Изделия могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Группа условий транспортирования 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.

Старший инженер

О.С. Артюх

Заведующий офтальмологическим
отделением клинической больницы
ПО «АВТОПРИБОР» и «ТОЧМАШ»

С.В. Корнев



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

2 (qba) лист а

Генеральный директор Зиновьев В.В.

