

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИ:

Маска медицинская защитная «Экотен» по ТУ 32.50.50-012-63055870-2020

Варианты исполнения:

- 1. Маска медицинская защитная «Экотен», артикул: ММ 1/55. Количество в упаковке: 5, или 10, или 20, или 30, или 40, или 50 штук**
- 2. Маска медицинская защитная «Экотен», артикул: ММ 1/65. Количество в упаковке: 5, или 10, или 20, или 30, или 40, или 50 штук**

Генеральный директор ООО «Экотен»



Осипов А.Г.

Назначение МИ: для медицинского персонала, пациентов и других лиц с целью снижения риска распространения инфекции.

Маска - изделие однократного применения, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит. Маска поставляется нестерильной.

Потенциальные потребители: медицинский персонал, взрослое население.

Условия применения: в медицинской организации, в бытовых условиях, в полевых условиях.

Показания к применению: в боксах и смотровых кабинетах инфекционного отделения, при работе в палатах (боксах) отделения капельных инфекций, в период карантина при возникновении инфекционных заболеваний с аэрогенным механизмом распространения.

Длительность использования: не более 2 часов. Если маска стала влажной ее следует заменить на чистую и сухую. Климатические условия применения маски: -10 - +35°C.

Маска обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия. Маски не ограничивают свободного дыхания. Сырье, материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления изделия, соответствуют требованиям действующих стандартов и технической документации изготовителя, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которой контактируют.

Комплект поставки изделия:

- Маска медицинская защитная «Экотен» – 1 упаковка;
- инструкция по применению, наклеенная на упаковку или вложенная в нее – 1 шт.
- этикетка, наклеенная на упаковку или вложенная в нее – 1 шт.

Порядок работы с изделием:

1. Проверить целостность маски. Не использовать в случае наличия повреждений в маске.
2. Приложить маску к лицу стороной, на которой прикреплены средства фиксации маски (резинки).
3. Закрепить за уши петли.
4. Расправить для удобства складки, чтобы маска плотно закрывала рот, нос и подбородок. Носовой зажим сформировать по форме носа.
5. После применения изделие снять аккуратно за петли, не касаясь самой маски, затем утилизировать.

Меры предосторожности и предупреждения: не использовать в случае наличия повреждений в маске. Изделие должно использоваться только один раз.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Риски применения: пренебрежимо малы или допустимы.

Возможные побочные эффекты: индивидуальные аллергические реакции.

Утилизация изделия и элементов его упаковки в медицинских организациях должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790: использованных изделий – как отходов класса Б или В, неиспользованных (просроченных, непригодных для использования) изделий – как отходов класса А.

Транспортирование и хранение: Маски транспортируются любым видом закрытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Условия транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Транспортирование маски в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и ГОСТ 15846.

Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150. Изделия должны храниться вдали от отопительных и нагревательных приборов, в сухом проветриваемом помещении с защитой от света, особенно прямых солнечных лучей и текущего воздуха (сквозняков, механической вентиляции).

Относительная влажность воздуха в помещении должна быть от 65 до 90 %.

Гарантии изготовителя: Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.50-012-63055870-2020, ГОСТ Р 58396-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Производитель, организация, принимающая претензии потребителей:

Общество с ограниченной ответственностью «Экотен». Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, пр. Константиновский, д. 18, лит. А, пом.10Н. Телефон: 8 (812) 325-09-04

Макет этикетки потребительской упаковки

ecoten идеи для движения	Маска медицинская защитная «Экотен»
	ТУ 32.50.50-012-63055870-2020 ТИП I по ГОСТ Р 58396-2019
<p>Назначение: для медицинского персонала, пациентов и других лиц с целью снижения риска распространения инфекции.</p> <p>Маска - изделие однократного применения, ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.</p> <p>Длительность использования: не более 2 часов. Если маска стала влажной ее следует заменить на чистую и сухую.</p> <p>Порядок использования:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проверить целостность маски. Не использовать в случае наличия повреждений в маске.2. Приложить маску к лицу.3. Закрепить за уши петли.4. Расправить для удобства складки, чтобы маска плотно закрывала рот, нос и подбородок. Носовой зажим сформировать по форме носа.5. После применения изделие снять аккуратно за петли, не касаясь самой маски, затем утилизировать. <p>Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150.</p> <p>Условия транспортирования по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.</p> <p>Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.</p> <p>Внимание! Не допускается применение в случае нарушения целостности упаковки.</p> <p>Производитель: ООО «Экотен», Россия, 197110, г.Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 18, лит.А, пом.10Н, (812) 325-09-04</p> <p>Соответствует ГОСТ Р 58396-2019</p> <p>Кол-во: _____ штук</p> <p>РУ № _____ от _____</p> <p>Номер партии: Произведено: ШК XX.YY.ZZZZ</p>	


4680281135019

Макет этикетки транспортной упаковки

ecoten идеи для движения	Маска медицинская защитная «Экотен»
	ТУ 32.50.50-012-63055870-2020 ТИП I по ГОСТ Р 58396-2019
<p>Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.</p> <p>Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до +40°C</p> <p>Производитель: ООО «Экотен», Россия, 197110, г.Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 18, лит.А, пом.10Н, (812) 325-09-04</p> <p>Кол-во: _____ упак.</p> <p>РУ № _____ от _____</p> <p>Номер партии: Произведено: XX.YY.ZZZZ</p>	

Пронумеровано и прошнуровано
3 (три) листа.

Генеральный директор
ООО «Экотен»

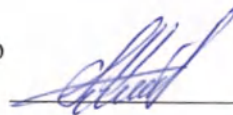

Осипов А. Г.

