

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

 Чэнь Син

11 декабря 2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Набор калибраторов для качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (HIV Calibrators (HIV CAL)) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL»

производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, People's Republic of China

место производства: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,
1203 Nanhuan Avenue, Guangming District, 518106 Shenzhen, People's Republic of China

2020 г.

Набор калибраторов для качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (HIV Calibrators (HIV CAL)) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL:

- 1. Калибратор C0, 2,0 мл - 1 флакон.**
- 2. Калибратор C1, 2,0 мл - 1 флакон.**
- 3. Калибровочная карта**
- 4. Инструкция по применению.**

HIV CAL

HIV Calibrators

Contents:

CO: 1×2.0 mL, CI: 1×2.0 mL

mindray



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Key 12th Road South, High Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

IVD



2018

mindray

HIV Calibrators

Order Information

Catalog No.	Package Size
HW211	CO: 1×2.0 mL/box CI: 1×2.0 mL/box

Intended Use

The Mindray HIV Calibrators (HIV CAL) are intended to calibrate the Mindray CL-series Chemiluminescence Immunoassay Analyzer for the qualitative determination of HIV p24 antigen, and antibodies to HIV-1 and/or HIV-2 in human serum and plasma.

Summary

HIV Calibrators are prepared by adding recombinant p24 antigen, antibody into buffer solution. The Mindray CL measurement system calculates an HIV result based on the ratio of the sample RLU to the control RLU (S/CO) for each specimen and control. Control RLU = Mean RLU of CO + (Mean RLU of CI - Mean RLU of CO) × calibration factor. The calibration factor is stored in calibration card for each lot. Mindray CL measurement system is composed of Mindray CL-series Chemiluminescence Immunoassay



Thereby we see no pharmaceutical

кавалитет CO, а не -
кавалитет CI, а не - Iqna

HIV CAL

2.0mL

LOT

2020020201



2021-09-13

HIV CAL

2.0mL

LOT

2020020201



2021-09-13


mindray

HIV

Calibration Card

LOT 2020020201

2021-09-13

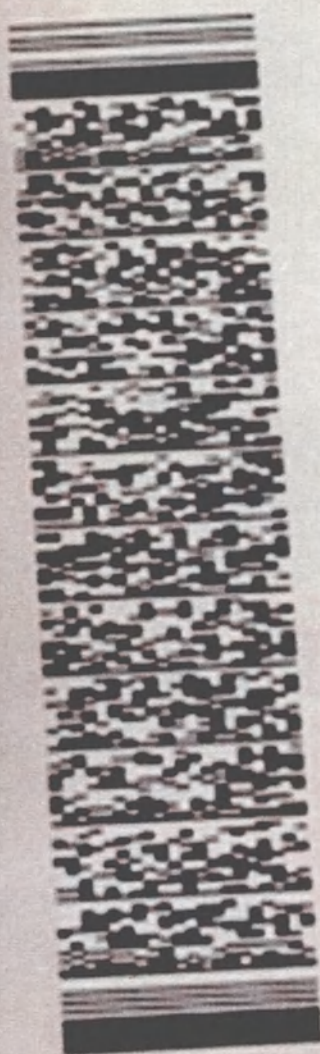

HIV CAL

P/N: 105-004303-00



HIV Calibrators
Калибраторы для теста на ВИЧ
Calibradores de HIV
Calibradores del VIH
Calibratori per HIV
HIV Kalibratörleri
Calibrateurs de VIH




REF HIV211

ALF202002020100458

LOT 2020020201  **2021-09-13**

047-007355-00(2.0)

Пакетика набора калибраторов HIV CAL

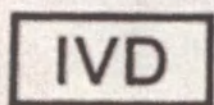

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel : +86 755 26582888 Fax : +86 755 26582680

Website : <http://www.mindray.com>

Минимализираните знаци на унаковке нудеат

Прошито и скреплено

печатью 7 листов

