

Инструкция по применению медицинского изделия

Перчатки медицинские хирургические одноразовые стерильные.

производства:

«ТЕРАНГ НУСА СДН. БХД.», Малайзия,

TERANG NUSA SDN. BHD., No. 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone, 16100 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim, Malaysia

Тел.: +609 774 7171, Факс: +609 774 7757, e-mail: sales@terangnusa.com.

Перчатки медицинские хирургические одноразовые стерильные изготавливаются из натурального сырья (натуральный латекс) и синтетических материалов (полиизопрен или хлоропрен), уложены попарно в запечатанный конверт. Конверты уложены в картонный блок, блоки уложены в транспортные коробки.

Информация о стерильности:

Перчатки медицинские хирургические одноразовые стерильны при условии сохранения целостности индивидуальной упаковки.


Предупреждение:

1. Изделие стерильно при условии ненарушенной упаковки.
2. Перчатки могут быть опудренные полностью абсорбируемым кукурузным крахмалом USP или неопудренные.
3. Для людей с аллергическими реакциями рекомендуется использовать неопудренные перчатки.

Инструкция по применению:

1. Предназначены только для одноразового применения.
2. Перед использованием перчаток убедиться в целостности упаковки и соответствии остаточного срока годности.
3. Извлечь перчатки из упаковки и надеть на руки.
4. После использования перчатки следует снять и утилизировать.
5. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих материал.
6. Хранить при температуре от 0 до 25°C, относительной влажности воздуха не более 85%. Беречь от прямых солнечных лучей, хранить вдалеке от источников озона и источников возгорания.

Генеральный директор
ООО «МедКэр»

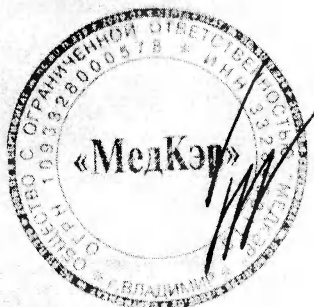

«07» марта 2013 г.
Кузнецов П.А.