



УТВЕРЖДАЮ
Менеджеры по продажам
Лейла Франк
Фабиан Франк

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия

«Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA»

производства «КЕНДА АГ», Лихтенштейн/ «KENDA AG», Liechtenstein

15.06.2020


FABIAN FRANK


Leila Frank

ИЮНЬ 2020

Версия 02

Die Echtheit der vor mir vollzogenen Unterschrift(en) von

Herr Franck Fabian, geb. 26.09.1987,

Adresse nach eigenen Angaben

FL-9490 Vaduz, Kanalstrasse 18

Identität ausgewiesen durch: Nr. Unterschrift hinterlegt



Frau Franck Leila, geb. 04.12.1989,

Adresse nach eigenen Angaben

FL-9490 Vaduz, Kanalstrasse 18

Identität ausgewiesen durch: Nr. Unterschrift hinterlegt

Anja Irma Gassner
Urkundsperson

16. Juni 2020



wird beglaubigt.

Vaduz, den 16.06.2020

Fürstliches Landgericht, Gassner Anja

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	4
2. Состав медицинского изделия	4
3. Сведения о производителе	8
4. Назначение и область применения	9
5. Показания к применению	9
6. Противопоказания	9
7. Возможные побочные действия, риски.....	9
8. Меры предосторожности.....	10
9. Потенциальные потребители	11
10. Способ применения.....	11
11. Условия применения	12
12. Описание медицинского изделия	12
13. Типы хвостовиков, безопасные комбинации с наконечниками стоматологическими	13
14. Технические характеристики и состав	15
14.1. I. Набор KENDA NOBILIS:	15
14. 2. II. Набор KENDA UNICUS:.....	21
14. 3. III. Набор KENDA COMPLETE:.....	27
14. 4. IV. Набор KENDA MAXIMUS:	34
14. 5. V.Набор KENDA DELUXE:	38
14. 6. VI. Набор KENDA HYBRID:.....	43
14. 7. VII. Набор KENDA COMPOSITE MICROFILL:	53
14.8. VIII. Набор KENDA C.G.I.:	64
14. 9. IX. Набор KENDA ZIRCOVIS:	73
14.10. X. Набор KENDA ALL CERAMIC:.....	76
14.11. XI. Набор KENDA DIAGUM	81
14.12. XII. Набор KENDA PROPHY:.....	92
14. 13. XIII. Набор KENDA PLANUS:	95
14.14. XIV. Набор KENDA AMALGAM:	100
14. 15. XV. Набор KENDA PRECIOUS METALS:.....	108
14. 16. XVI. Набор KENDA FG SERIES:	118
14.17. XVII. Набор KENDA Z-SERIES:	120
14. 18. XVIII. Набор KENDA HIGH END.....	124
14. 19. XIX. Набор KENDA WHEEL&KNIFE	126

14.20. XX. Набор KENDA QUEEN:	132
14.21. XXI. Набор KENDA ACRYLIC BLUE:	141
14.22. XXII. Набор KENDA RED:.....	147
14. 23. XXIII. Набор KENDA YELLOW LINE:.....	150
14.24. XXIV. Набор KENDA BESTFLEX:	152
14.25. XXV. Набор KENDA ZIRCO 1	154
14.26. XXVI. Набор KENDA дискодержатели	155
15. Принципы и порядок работы.....	157
16. Содержание лекарственных средств	160
17. Сведения о материалах.....	160
Материалы допущены для указанного применения. Основные требования перечислены в EN ISO 21671	164
18. Сведения о верификации и валидации изделия	164
19. Требования к охране окружающей среды	164
20. Очистка, дезинфекция, стерилизация перед применением	164
20.1. Методы очистки и дезинфекции перед первым применением	165
21. Инструкция по повторной обработке и стерилизации.....	166
22. Применяемые международные стандарты.	167
23. Транспортировка.....	168
24. Проект маркировки для России.....	168
25. Хранение, срок годности, срок службы	170
26. Утилизация	170
27. Рекламации	170
28. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия. Сервисное обслуживание	170
29. Зарегистрированные модификации производителя «KENDA AG» в Российской Федерации. .	171

1. Наименование медицинского изделия

«Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA»

производства «КЕНДА АГ» Лихтенштейн/ «KENDA AG», Kanalstrasse 18, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein, Тел. +423 3882311, Факс: +423 3882319, e-mail: info@kenda-dental.com -

2. Состав медицинского изделия

«Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA»

Варианты исполнения:

I. Набор KENDA NOBILIS:

REF 0300.006A, REF 0300.012, REF 0301.006, REF 0301.012, REF 0301.025, REF 0301.100, REF 0302.006, REF 0302.012, REF 0302.025, REF 0302.100, REF 0303.006, REF 0303.012, REF 0303.025, REF 0303.100, REF 0304.006, REF 0304.012, REF 0304.025, REF 0304.100, REF 0305.006, REF 0305.012, REF 0305.025, REF 0305.100, REF 0306.006, REF 0306.012, REF 0306.025, REF 0306.100, REF 0307.006, REF 0307.012, REF 0307.025, REF 0307.100, REF 0308.006, REF 0308.012, REF 0308.025, REF 0308.100, REF 0309.006, REF 0309.012, REF 0309.025, REF 0309.100, REF 0310.006, REF 0310.012, REF 0310.025, REF 0310.100, REF 0311.006, REF 0311.012, REF 0311.025, REF 0311.100.

II. Набор KENDA UNICUS:

REF 0350.006A, REF 0350.012, REF 0351.006, REF 0351.012, REF 0351.025, REF 0351.100, REF 0352.006, REF 0352.012, REF 0352.025, REF 0352.100, REF 0353.006, REF 0353.012, REF 0353.025, REF 0353.100, REF 0354.006, REF 0354.012, REF 0354.025, REF 0354.100, REF 0355.006, REF 0355.012, REF 0355.025, REF 0355.100, REF 0356.006, REF 0356.012, REF 0356.025, REF 0356.100, REF 0357.006, REF 0357.012, REF 0357.025, REF 0357.100, REF 0358.006, REF 0358.012, REF 0358.025, REF 0358.100, REF 0359.006, REF 0359.012, REF 0359.025, REF 0359.100, REF 0360.006, REF 0360.012, REF 0360.024, REF 0360.100, REF 0361.006, REF 0361.012, REF 0361.025, REF 0361.100.

III. Набор KENDA COMPLETE:

REF 0500.012A, REF 0500.012, REF 0503.006, REF 0503.012, REF 0503.025, REF 0503.100, REF 0505.006, REF 0505.012, REF 0505.025, REF 0505.100, REF 0508.006, REF 0508.012, REF 0508.025, REF 0508.100, REF 0509.006, REF 0509.012, REF 0509.025, REF 0509.100, REF 0510.006, REF 0510.012, REF 0510.025, REF 0510.100, REF 0513.006, REF 0513.012, REF 0513.025, REF 0513.100, REF 0553.006, REF 0553.012, REF 0553.025, REF 0553.100, REF 0555.006, REF 0555.012, REF 0555.025, REF 0555.100, REF 0558.006, REF 0558.012, REF 0558.025, REF 0558.100, REF 0559.006, REF 0559.012, REF 0559.025, REF 0559.100, REF 0560.006, REF 0560.012, REF 0560.025, REF 0560.100, REF 0563.006, REF 0563.012, REF 0563.025, REF 0563.100.

IV. Набор KENDA MAXIMUS:

REF 0380.006A, REF 0380.012, REF 0384.006, REF 0384.012, REF 0384.025, REF 0384.100, REF 0385.006, REF 0385.012, REF 0385.025, REF 0385.100, REF 0386.006, REF 0386.012, REF 0386.025, REF 0386.100, REF 0388.006, REF 0388.012, REF 0388.025, REF 0388.100, REF 0389.006, REF 0389.012, REF 0389.025, REF 0389.100, REF 0390.006, REF 0390.012, REF 0390.025, REF 0390.100, REF 0391.006, REF 0391.012, REF 0391.025, REF 0391.100.

V. Набор KENDA DELUXE:

REF 0400.006A, REF 0400.012, REF 0406.006, REF 0406.012, REF 0406.025, REF 0406.100, REF 0408.006, REF 0408.012, REF 0408.025, REF 0408.100, REF 0409.006, REF 0409.012, REF 0409.025, REF 0409.100, REF 0411.006, REF 0411.012, REF 0411.025, REF 0411.100, REF 0413.006, REF 0413.012, REF 0413.025, REF 0413.100, REF 0456.006, REF 0456.012, REF 0456.025, REF 0456.100, REF 0458.006, REF 0458.012, REF 0458.025, REF 0458.100, REF 0459.006, REF 0459.012, REF 0459.025, REF 0459.100, REF 0461.006, REF 0411.012, REF 0461.025, REF 0461.100, REF 0463.006, REF 0463.012, REF 0463.025, REF 0463.100.

VI. Набор KENDA HYBRID:

REF 790.012A, REF 790.012, REF 0004.006, REF 0004.012, REF 0004.025, REF 0004.100, REF 0005.006, REF 0005.012, REF 0005.025, REF 0005.100, REF 0006.006, REF 0006.012, REF 0006.025, REF 0006.100, REF 0008.006, REF 0008.012, REF 0008.025, REF 0008.100, REF 0009.006, REF 0009.012, REF 0009.025, REF 0009.100, REF 0010.006, REF 0010.012, REF 0010.025, REF 0010.100, REF 0104.006, REF 0104.012, REF 0104.025, REF 0104.100, REF 0105.006, REF 0105.012, REF 0105.025, REF 0105.100, REF 0106.006, REF 0106.012, REF 0106.025, REF 0106.100, REF 0108.006, REF 0108.012, REF 0108.025, REF 0108.100, REF 0109.006, REF 0109.012, REF 0109.025, REF 0109.100, REF 0110.006, REF 0110.012, REF 0110.025, REF 0110.100, REF 791.006 HP, REF 0006.006 HP, REF 0006.012 HP, REF 0006.025 HP, REF 0006.100 HP, REF 0008.006 HP, REF 0008.012 HP, REF 0008.025 HP, REF 0008.100 HP, REF 0014.006 HP, REF 0014.012 HP, REF 0014.025 HP, REF 0014.100 HP, REF 0106.006 HP, REF 0106.012 HP, REF 0106.025 HP, REF 0106.100 HP, REF 0108.006 HP, REF 0108.012 HP, REF 0108.025 HP, REF 0108.100 HP, REF 0114.006 HP, REF 0114.012 HP, REF 0114.025 HP, REF 0114.100 HP.

VII. Набор KENDA COMPOSITE MICROFILL:

REF 750.012A, REF 750.012, REF 4001.006, REF 4001.012, REF 4001.025, REF 4001.100, REF 4002.006, REF 4002.012, REF 4002.025, REF 4002.100, REF 4003.006, REF 4003.012, REF 4003.025, REF 4003.100, REF 4004.006, REF 4004.012, REF 4004.025, REF 4004.100, REF 4005.006, REF 4005.012, REF 4005.025, REF 4005.100, REF 4006.006, REF 4006.012, REF 4006.025, REF 4006.100, REF 4007.006, REF 4007.012, REF 4007.025, REF 4007.100, REF 4008.006, REF 4008.012, REF 4008.025, REF 4008.100, REF 4009.006, REF 4009.012, REF 4009.025, REF 4009.100, REF 4010.006, REF 4010.012, REF 4010.025, REF 4010.100, REF 4011.006, REF 4011.012, REF 4011.025, REF 4011.100, REF 5001.006, REF 5001.012, REF 5001.025, REF 5001.100, REF 5002.006, REF 5002.012, REF 5002.025, REF 5002.100, REF 5003.006, REF 5003.012, REF 5003.025, REF 5003.100, REF 5004.006, REF 5004.012, REF 5004.025, REF 5004.100, REF 5005.006, REF 5005.012, REF 5005.025, REF 5005.100, REF 5006.006, REF 5006.012, REF 5006.025, REF 5006.100, REF 5007.006, REF 5007.012, REF 5007.025, REF 5007.100, REF 5008.006, REF 5008.012, REF 5008.025, REF 5008.100, REF 5009.006, REF 5009.012, REF 5009.025, REF 5009.100, REF 5010.006, REF 5010.012, REF 5010.025, REF 5010.100, REF 5011.006, REF 5011.012, REF 5011.025, REF 5011.100.

VIII. Набор KENDA C.G.I.:

REF 900.ASS.012, REF SA900.ASS.012, REF 900.ASS.025, REF 905.ASS.012, REF 905.ASS.025, REF 908.ASS.012, REF 908.ASS.025, REF 909.ASS.012, REF 909.ASS.025, REF 910.ASS.012, REF 910.ASS.025, REF 905.C.006, REF 905.C.012, REF 905.C.025, REF 905.C.100, REF 905.F.006, REF 905.F.012, REF 905.F.025, REF 905.F.100, REF 905.M.006, REF 905.M.012, REF 905.M.025, REF 905.M.100, REF 908.C.006, REF 908.C.012, REF 908.C.025, REF 908.C.100, REF 908.F.006, REF 908.F.012, REF 908.F.025, REF 908.F.100, REF 908.M.006, REF 908.M.012, REF 908.M.025, REF 908.M.100, REF 909.C.006, REF 909.C.012, REF 909.C.025, REF 909.C.100, REF 909.F.006, REF 909.F.012, REF 909.F.025, REF 909.F.100, REF 909.M.006, REF 909.M.012, REF 909.M.025, REF 909.M.100, REF 910.C.006, REF 910.C.012, REF 910.C.025, REF 910.C.100, REF 910.F.006, REF 910.F.012,

REF 910.F.025, REF 910.F.100, REF 910.M.006, REF 910.M.012, REF 910.M.025, REF 910.M.100, REF 933.C.006, REF 933.C.012, REF 933.C.025, REF 933.C.100, REF 933.F.006, REF 933.F.006, REF 933.F.012, REF 933.F.025, REF 933.M.100, REF 933.M.006, REF 933.M.012, REF 933.M.025, REF 933.M.100.

IX. Набор KENDA ZIRCOVIS:

REF 0250.006A, REF 0250.012, REF 0255.006, REF 0255.012, REF 0255.025, REF 0255.100, REF 0256.006, REF 0256.012, REF 0256.025, REF 0256.100, REF 0258.006, REF 0258.012, REF 0258.025, REF 0258.100, REF 0265.006, REF 0265.012, REF 0265.025, REF 0265.100, REF 0266.006, REF 0266.012, REF 0266.025, REF 0266.100, REF 0268.006, REF 0268.012, REF 0268.025, REF 0268.100.

X. Набор KENDA ALL CERAMIC:

REF 0200.006A, REF 0200.012, REF 0215.006, REF 0215.012, REF 0215.025, REF 0215.100, REF 0216.006, REF 0216.012, REF 0216.025, REF 0216.100, REF 0218.006, REF 0218.012, REF 0218.025, REF 0218.100, REF 0219.006, REF 0219.012, REF 0219.025, REF 0219.100, REF 0225.006, REF 0225.012, REF 0225.025, REF 0225.100, REF 0226.006, REF 0226.012, REF 0226.025, REF 0226.100, REF 0228.006, REF 0228.012, REF 0228.025, REF 0228.100, REF 0229.006, REF 0229.012, REF 0229.025, REF 0229.100

XI. Набор KENDA DIAGUM:

REF 780.012, REF 6001.006, REF 6001.012, REF 6001.025, REF 6001.100, REF 6002.006, REF 6002.012, REF 6002.025, REF 6002.100, REF 6003.006, REF 6003.012, REF 6003.025, REF 6003.100, REF 6004.006, REF 6004.012, REF 6004.025, REF 6004.100, REF 6005.006, REF 6005.012, REF 6005.025, REF 6005.100, REF 6006.006, REF 6006.012, REF 6006.025, REF 6006.100, REF 6007.006, REF 6007.012, REF 6007.025, REF 6007.100, REF 6008.006, REF 6008.012, REF 6008.025, REF 6008.100, REF X003.006, REF X003.012, REF X003.025, REF X003.100, REF X004.006, REF X004.012, REF X004.025, REF X004.100, REF 005.006, REF X005.012, REF X005.025, REF X005.100, REF X006.006, REF X006.012, REF 006.025, REF X006.100, REF X007.006, REF X007.012, REF X007.025, REF X007.100, REF 008.006, REF X008.012, REF X008.025, REF X008.100, REF 781.006 HP, REF 6106.006 HP, REF 6106.012 HP, REF 6106.025 HP, REF 6106.100 HP, REF 6108.006 HP, REF 6108.012 HP, REF 6108.025 HP, REF 6108.100 HP, REF 6110.006 HP, REF 6110.012 HP, REF 6110.025 HP, REF 6110.100 HP, REF 6114.006 HP, REF 6114.012 HP, REF 6114.025 HP, REF 6114.100 HP, REF X006.006 HP, REF X006.012 HP, REF X006.025 HP, REF X006.100 HP, REF X008.006 HP, REF X008.012 HP, REF X008.025 HP, REF X008.100 HP, REF X010.006 HP, REF X010.012 HP, REF X010.025 HP, REF X010.100 HP, REF X014.006 HP, REF X014.012 HP, REF X014.025 HP, REF X014.100 HP.

XII. Набор KENDA PROPHY:

REF 5100.012, REF 5105.006, REF 5105.012, REF 5105.025, REF 5105.100, REF 5106.006, REF 5106.012, REF 5106.025, REF 5106.100, REF 5108.006, REF 5108.012, REF 5108.025, REF 5108.100, REF 5110.006, REF 5110.012, REF 5110.025, REF 5110.100.

XIII. Набор KENDA PLANUS:

REF 0600.012, REF 0601.006, REF 0601.012, REF 0601.025, REF 0601.100, REF 0608.006, REF 0608.012, REF 0608.025, REF 0608.100, REF 0611.006, REF 0611.012, REF 0611.025, REF 0611.100, REF 0618.006, REF 0618.012, REF 0618.025, REF 0618.100, REF 6700.006, REF 6715.006, REF 6715.012, REF 6715.025, REF 6715.100, REF 6720.006, REF 6720.012, REF 6720.025, REF 6720.100, REF 6815.006, REF 6815.012, REF 6815.025, REF 6815.100, REF 6820.006, REF 6820.012, REF 6820.025, REF 6820.100.

XIV. Набор KENDA AMALGAM:

REF 700.012A, REF 700.012, REF 2001.006, REF 2001.012, REF 2001.025, REF 2001.100, REF 2002.006, REF 2002.012, REF 2002.025, REF 2002.100, REF 2003.006, REF 2003.012, REF 2003.025, REF 2003.100, REF 2004.006, REF 2004.012, REF 2004.025, REF 2004.100, REF 2005.006, REF 2005.012, REF 2005.025, REF 2005.100, REF 2006.006, REF 2006.012, REF 2006.025, REF 2006.100, REF 2007.006, REF 2007.012, REF 2007.025, REF 2007.100, REF 2008.006, REF 2008.012, REF 2008.025, REF 2008.100, REF 3001.006, REF 3001.012, REF 3001.025, REF 3001.100, REF 3002.006, REF 3002.012, REF 3002.025, REF 3002.100, REF 3003.006, REF 3003.012, REF 3003.025, REF 3003.100, REF 3004.006, REF 3004.012, REF 3004.025, REF 3004.100, REF 3005.006, REF 3005.012, REF 3005.025, REF 3005.100, REF 3006.006, REF 3006.012, REF 3006.025, REF 3006.100, REF 3007.006, REF 3007.012, REF 3007.025, REF 3007.100, REF 3008.006, REF 3008.012, REF 3008.025, REF 3008.100.

XV. Набор KENDA PRECIOUS METALS:

REF 740.012A, REF 740.012, REF 1004.006, REF 1004.012, REF 1004.025, REF 1004.100, REF 1005.006, REF 1005.012, REF 1005.025, REF 1005.100, REF 1006.006, REF 1006.012, REF 1006.025, REF 1006.100, REF 1008.006, REF 1008.012, REF 1008.025, REF 1008.100, REF 1009.006, REF 1009.012, REF 1009.025, REF 1009.100, REF 1010.006, REF 1010.012, REF 1010.025, REF 1010.100, REF 1104.006, REF 1104.012, REF 1104.025, REF 1104.100, REF 1105.006, REF 1105.012, REF 1105.025, REF 1105.100, REF 1106.006, REF 1106.012, REF 1106.025, REF 1106.100, REF 1108.006, REF 1108.012, REF 1108.025, REF 1108.100, REF 1109.006, REF 1109.012, REF 1109.025, REF 1109.100, REF 1110.006, REF 1110.012, REF 1110.025, REF 1110.100, REF 741.006 HP, REF 1006.006 HP, REF 1006.012 HP, REF 1006.025 HP, REF 1006.100 HP, REF 1008.006 HP, REF 1008.012 HP, REF 1008.025 HP, REF 1008.100 HP, REF 1014.006 HP, REF 1014.012 HP, REF 1014.025 HP, REF 1014.100 HP, REF 1106.006 HP, REF 1106.012 HP, REF 1106.025 HP, REF 1106.100 HP, REF 1108.006 HP, REF 1108.012 HP, REF 1108.025 HP, REF 1108.100 HP, REF 1114.006 HP, REF 1114.012 HP, REF 1114.025 HP, REF 1114.100 HP.

XVI. Набор KENDA FG SERIES:

REF 4006.005 FG, REF 5006.005 FG, REF 0306.005 FG, REF 0386.005 FG, REF 2006.005 FG, REF 3006.005 FG.

XVII. Набор KENDA Z-SERIES:

REF Z-000.006, REF Z-006.003, REF Z-014.003, REF Z-000.009, REF Z-010.003, REF Z-006.C.003, REF Z-006.M.003, REF Z-006.F.003, REF Z-010.C.003, REF Z-010.M.003, REF Z-010.F.003, REF Z-014.C.003, REF Z-014.M.003, REF Z-014.F.003.

XVIII. Набор KENDA HIGH END

REF 626.004, REF 626-C.001, REF 626-M.001, REF 626-F.001, REF 626-XF.001

XIX. KENDA WHEEL&KNIFE

REF 6522.R.010, REF 6522.R.100, REF 6517.R.010, REF 6517.R.100, REF 6522.L.010, REF 6522.L.100, REF 7522.R.010, REF 7522.R.100, REF 7517.R.010, REF 7517.R.100, REF 7522.L.010, REF 7522.L.100, REF 1522.R.010, REF 1522.R.100, REF 1517.R.010, REF 1517.R.100, REF 1522.L.010, REF 1522.L.100, REF 2522.R.010, REF 2522.R.100, REF 2517.R.010, REF 2517.R.100, REF 2522.L.010, REF 2522.L.100, REF 3522.R.010, REF 3522.R.100, REF 3517.R.010, REF 3517.R.100, REF 3522.L.010, REF 3522.L.100, REF 9522.R.010, REF 9522.R.100, REF 9517.R.010, REF 9517.R.100, REF 9522.L.010, REF 9522.L.100.

XX. Набор KENDA QUEEN:

REF 9008.006, REF 9008.012, REF 9008.025, REF 9008.100, REF 9009.006, REF 9009.012, REF 9009.025, REF 9009.100, REF 9010.006, REF 9010.012, REF 9010.025, REF 9010.100, REF 9011.006, REF 9011.012, REF 9011.025, REF 9011.100, REF 9012.006, REF 9012.012, REF 9012.025, REF 9012.100, REF 9013.006, REF 9013.012, REF 9013.025, REF 9013.100, REF 9014.006, REF 9014.012, REF 9014.025, REF 9014.100, REF 9015.006, REF 9015.012, REF 9015.025, REF 9015.100, REF 9016.006, REF 9016.012, REF 9016.025, REF 9016.100, REF 7008.006, REF 7008.012, REF 7008.025, REF 7008.100, REF 7009.006, REF 7009.012, REF 7009.025, REF 7009.100, REF 7010.006, REF 7010.012, REF 7010.025, REF 7010.100, REF 7011.006, REF 7011.012, REF 7011.025, REF 7011.100, REF 7012.006, REF 7012.012, REF 7012.025, REF 7012.100, REF 7013.006, REF 7013.012, REF 7013.025, REF 7013.100, REF 7014.006, REF 7014.012, REF 7014.025, REF 7014.100, REF 7015.006, REF 7015.012, REF 7015.025, REF 7015.100, REF 7016.006, REF 7016.012, REF 7016.025, REF 7016.100.

XXI. Набор KENDA ACRYLIC BLUE:

REF 8614.006, REF 8308.006, REF 8308.012, REF 8308.025, REF 8308.100, REF 8311.006, REF 8311.012, REF 8311.025, REF 8311.100, REF 8314.006, REF 8314.012, REF 8314.025, REF 8314.100, REF 8315.006, REF 8315.012, REF 8315.025, REF 8315.100, REF 8408.006, REF 8408.012, REF 8408.025, REF 8408.100, REF 8411.006, REF 8411.012, REF 8411.025, REF 8411.100, REF 8414.006, REF 8414.012, REF 8414.025, REF 8414.100, REF 8415.006, REF 8415.012, REF 8415.025, REF 8415.100, REF 8508.006, REF 8508.012, REF 8508.025, REF 8508.100, REF 8511.006, REF 8511.012, REF 8511.025, REF 8511.100, REF 8514.006, REF 8514.012, REF 8514.025, REF 8514.100, REF 8515.006, REF 8515.012, REF 8515.025, REF 8515.100.

XXII. Набор KENDA RED:

REF RED.8.006, REF RED.8.012, REF RED.8.025, REF RED.8.100, REF RED.14.006, REF RED.14.012, REF RED.14.025, REF RED.14.100, REF 10008.006, REF 10008.012, REF 10008.025, REF 10008.100, REF 10014.006, REF 10014.012, REF 10014.025, REF 10014.100, REF 301.L.006, REF 301.L.100.

XXIII. Набор KENDA YELLOW LINE:

REF Y-000A, REF Y-000, REF Y-008.003, REF Y-014.003, REF Y-018.003, REF Y-019.003.

XXIV. Набор KENDA BESTFLEX:

REF 6500.006, REF 6508.006, REF 6508.012, REF 6508.025, REF 6508.100, REF 6514.006, REF 6514.012, REF 6514.025, REF 6514.100, REF 6516.006, REF 6516.012, REF 6516.025, REF 6516.100.

XXV. Набор KENDA ZIRCO 1

REF 0230.006, REF 0233.006, REF 0240.006.

XXVI. Набор KENDA дискодержатели

REF 342.001, REF 342.006, REF 342.100.

3. Сведения о производителе

3.1. Разработчик:

«КЕНДА АГ» Лихтенштейн/ «KENDA AG», Kanalstrasse 18, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein, тел. +423 3882311, факс +423 3882319, info@kenda-dental.com

3.2. Производитель:

«КЕНДА АГ» Лихтенштейн/ «KENDA AG», Kanalstrasse 18, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein, тел. +423 3882311, факс +423 3882319, info@kenda-dental.com

3.3. Место производства:

«КЕНДА АГ» Лихтенштейн/ «KENDA AG», Kanalstrasse 18, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein, тел. +423 3882311, факс +423 3882319, info@kenda-dental.com

3.4. Уполномоченный представитель

ООО «МедТестКонсалтинг», Россия, 123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1, корп.1, офис 193.

Тел +7 (495) 750-29-01, +7 (903) 729-77-14, medtestconsult@mail.ru

4. Назначение и область применения

Медицинское изделие «Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA» предназначено для удаления излишков пломбировочного материала, полировки зубных протезов, пломб, зубов, а также для удаления зубного камня.

Областью применения изделия является терапевтическая, ортопедическая, эстетическая и гигиеническая стоматология.

5. Показания к применению

Медицинское изделие «Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA» предназначено для удаления излишков пломбировочного материала, полировки зубных протезов, пломб, зубов, а также для удаления зубного камня.

Полиры используются для полировки различных стоматологических материалов: оксидной и силикатной керамики, композитов, гибридных композитов, гибридной керамики, циркония, амальгамы, драгоценных металлов, полудрагоценных металлов, недрагоценных металлов, титановых сплавов, акриловых протезов, протезов на основе нейлона, стеклоиономеров, компомеров, а также для зубной эмали.

На упаковке каждого набора указан вид стоматологических материалов или проблема зубов, для которых рекомендуется обработка данным набором полиров.

6. Противопоказания

Головка полиров состоит из силикона и абразива, хвостовики изготовлены из стали. Полиры не должны использоваться, если пациент страдает от аллергии на какие-либо из перечисленных компонентов.

7. Возможные побочные действия, риски

Риски в отношении изделий определяются в соответствии с требованиями EN ISO 14971. Управление рисками осуществляется при помощи системы анализа рисков, а также конструкторского анализа типов отказов и последствий (FMEA).

Все выявленные риски имеют показатели ниже установленных пределов и являются допустимыми. Были выявлены следующие остаточные риски.

№	Остаточный риск	Вероятная причина	Превентивные меры	Происшествия
---	-----------------	-------------------	-------------------	--------------

1	Инфекция из-за ненадлежащей стерилизации	Ошибка пользователя	Предоставляются инструкции по стерилизации	Нет информации о происшествиях за последние 5 лет.
2	Персональное повреждение пользователя, ассистента или пациента изделием	Ошибка пользователя, Дефектные изделия	Валидация производственного процесса, 100% приемочный контроль	Нет информации о происшествиях за последние 5 лет.
3	Повреждение пациента пользователем во время лечения	Ошибка пользователя из-за несоблюдения инструкций	Предоставляются инструкции по использованию	Нет информации о происшествиях за последние 5 лет.
4	Повреждение зуба	Дефектные изделия	В инструкции по использованию приведены меры предосторожности.	Нет информации о происшествиях за последние 5 лет.
5	Пациента получил инфекцию от изделия	Несовместимые материалы, дефектные изделия	• Тестирование биологической нагрузки • Предупреждения в отношении гигиенических инструкций о том, что полиры необходимо обрабатывать перед использованием.	Нет информации о происшествиях за последние 5 лет.
6	Токсикологическое воздействие на пациентов	Несовместимые материалы, дефектные изделия	Проведено тестирование биологической совместимости • Цитотоксичность • Сенсибилизация • Внутрикожная реакция • Острая пероральная токсичность	Нет информации о происшествиях за последние 5 лет.

В результате действий компании «KENDA AG» описанные риски были сведены к минимуму или исключены. Кроме того, за последние 5 лет не было никаких сообщений о происшествиях, которые могли бы отслеживаться успешной системой управления рисками.

8. Меры предосторожности

- Все наборы полиров поставляются нестерильными. Перед применением и после каждого использования изделия с хвостовиками для углового и турбинного наконечника, а также Набор KENDA PLANUS для прямого наконечника должны пройти процедуру очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым

применением и повторную обработку и стерилизацию после каждого случая использования. Все остальные наборы используются в зуботехнических лабораториях и проходят только процедуру очистки перед применением и после каждого использования.

- Изделия могут применяться только в указанной области применения.
- Используйте полиры только с совместимыми стоматологическими наконечниками.
- Перед применением проверьте надежность соединения медицинского изделия со стоматологическим наконечником и выполните пробный пуск.
- Использование поврежденного или потерявшего центровку медицинского изделия должно быть немедленно прекращено.
- Избегайте чрезмерного давления во время полировки или финишной обработки на зуб пациента.
- Недостаточное охлаждение водой во время работы может привести к необратимым повреждениям как зуба, так и окружающих тканей.
- При процедуре дезинфекции не увеличивайте время воздействия дезинфицирующего средства, которое рекомендует производитель, так как избыток времени дезинфекции может привести к набуханию головки полиров.
- Не используйте дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды.
- Не превышайте максимальные обороты, указанные на этикетке медицинского изделия.
- При работе воспользуйтесь защитными медицинскими перчатками.
- При работе воспользуйтесь защитной медицинской маской.
- При работе наденьте очки защитные медицинские.
- Использовать только паровой метод стерилизации. Стерилизация горячим воздухом не допустима.
- Не использовать изделие после истечения срока годности.
- Не используйте неисправные медицинские изделия (наличие визуальных деформаций). Обратитесь с претензией по качеству

9. Потенциальные потребители

Приобретение и использование данного изделия допускается исключительно врачами и зубными техниками. Изделие промаркировано символом Rx only.

Может быть использовано в специализированных (стоматологических) лечебных учреждениях специально обученным медицинским персоналом – врачом, зубным техником.

10. Способ применения

Варианты исполнения медицинского изделия «Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA» имеют три различных типа хвостовиков и совместимы с угловыми, прямыми или турбинными стоматологическими наконечниками. Максимальная рекомендуемая скоростью вращения 15 000 оборотов в минуту (для угловых и прямых наконечников) и 20 000 оборотов в минуту для турбинных наконечников.

Соединение со стоматологическим наконечником гарантируется диаметрами стоматологических полиров:

С угловым наконечником (RA): Ø 2.35 (+0 / -0.016) мм

С прямым наконечником: (HP) Ø 2.35 (+0 / -0.016) мм

С турбинным наконечником: (FG) Ø 1,6 (+0 / -0.01) мм

Диаметры хвостовиков являются стандартными в соответствии с EN ISO 1797-1 и 1797-2.

Медицинское изделие «Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA» является совместимым с наконечниками, например, «Наконечники стоматологические, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями» производства Бьен-Эйр Дентал СА, Швейцария, (Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3410 от 15 декабря 2015 г.)

Перед подачей инструмента к объекту обработки (зубу, протезу, пломбе) необходимо вывести его на нужную частоту вращения. Быстрые ротационные движения головки полира позволяют деликатно удалять мельчайшие частички с поверхности обрабатываемого объекта.

В зависимости от типа обрабатываемого материала специалист выбирает полир подходящей формы и типом абразива. Нагревание предотвращается при помощи водяного охлаждения в расходом не менее 50 мл/мин.

11. Условия применения

Медицинское изделие предназначено для использования подготовленным профессиональным медицинским персоналом при температуре от +15 до +25°C, влажности воздуха от 10 до 80% в ЛПУ, стоматологических кабинетах.

12. Описание медицинского изделия

Гладкая отполированная поверхность зубных протезов, пломб и зубов клинически необходима, так как наличие неровностей может вести к образованию пятен, отложению зубного камня, раздражению десен, возвратному кариесу, повышенной истираемости, ускоренному износу и неприятным тактильным ощущениям в ротовой полости пациента. Кроме того, качественно полированная поверхность продлевает срок службы зубных протезов, пломб и зубов, позволяет достичь привлекательного внешнего вида.

Полиры KENDA представлены широкой линейкой форм, размеров и типов абразива. В зависимости от локализации проблемной зоны и типа обрабатываемого материала стоматолог выбирает подходящий вариант исполнения.

Полиры имеют разнообразную геометрическую форму, выполнены в различной цветовой гамме, расфасованы в упаковки по 6, 12, 25 и 100 штук одного типа. Также выпускаются и ознакомительные наборы, состоящие из полиров различных форм одного и того же варианта исполнения (по 1, 3, 4, 6, 12 штук). Для применения полиров не требуется дополнительная полировальная паста.

Полирующая головка изготовлена из силикона с запеченными в ней методом вулканизации абразивными частицами алмаза (C), карбида кремния (SiC) или оксида алюминия (Al₂O₃).

Полиры с алмазными частицами имеют на хвостовике маркировочную цветную полосу, которая указывает на размер зерен алмазной крошки в соответствии с ISO 21671.



Цвет полосы на хвостовике –
индикатор размера абразива
алмазных частиц

Таблица 1.

Цвет полосы	Характеристика зернистости	Размеры частиц (мкм)
Белый	Ультрамелкая зернистость	4-1
Желтый	Сверхмелкая зернистость	8-4

Красный	Мелкая зернистость	32-8
Синий	Средняя зернистость	69-32
Зеленый	Крупная зернистость	164-69
Темно-серый	Грубая зернистость	> 164

Размер зерен абразива у полиров с частицами карбида кремния и оксида алюминия указан в таблице «Технические характеристики».


13. Типы хвостовиков, безопасные комбинации с наконечниками стоматологическими

Хвостовик полиров выполнен из нержавеющей стали марки 1.4104 и представлен тремя типами:

- тип 1 в соответствии с ISO 1797:2017, для угловых наконечников (RA).
- тип 2 в соответствии с ISO 1797:2017, для прямых наконечников (HP).
- тип 3 в соответствии с ISO 1797:2017, для турбинных наконечников (FG) со сферической фаской

Параметр	Тип 1	Тип 2	Тип 3
Диаметр (мм)	2,35 (+0/- 0,016)	2, 35 (+0/- 0,016)	1,6 (+0/-0,01)
Минимальная длина зажимаемой части (мм)	11	30	9
Общая длина стержня (мм)	18,5 ± 0,9	32,0 – 47,0 (см. Табл. Технические характеристики для каждого исполнения)	13,0±0,6
Шероховатость (мкм)	≤ 1 мкм	≤ 1 мкм	≤ 0,5 мкм
Твердость	Не менее 250 HV5	Не менее 250 HV5	Не менее 250 HV5
Совместимость с наконечником	RA (угловой)	HP (прямой)	FG (турбинный)


Конструкция хвостовиков полиров

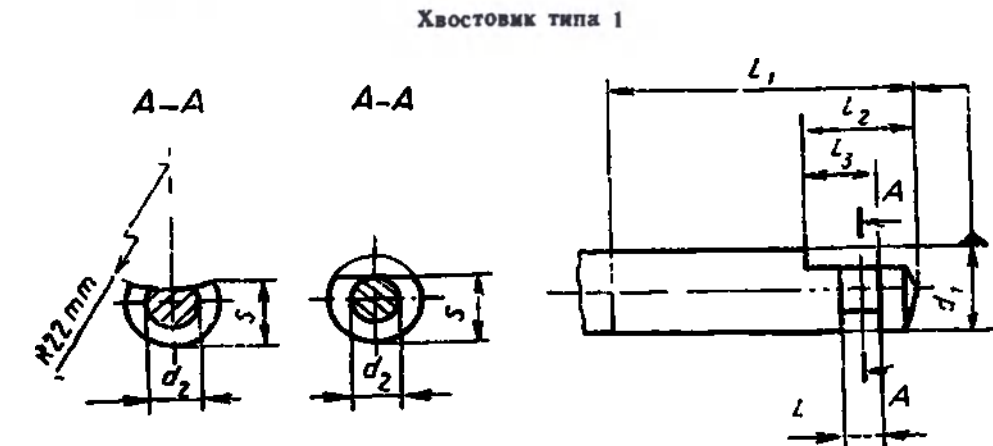

Черт. 1


$L - 0,9(\pm 0,05) \text{ мм};$
 $L1 \text{ минимальная } -11,00 \text{ мм},$
 $L2 - 2,7(+0/-0,3) \text{ мм};$
 $L3 - 1,8 (+0,05/-0) \text{ мм};$
 $d1 - \varnothing 2,35 (+0/-0,016) \text{ мм};$
 $d2 - \varnothing 1,35 (+0,1/-0,05) \text{ мм};$
 $S - 1,8 (+0/-0,06) \text{ мм}$
 Шероховатость поверхности хвостовика $\leq 1 \text{ мкм}$
 Твердость $\geq 250 \text{ VH } 5.$

Хвостовик тип 2

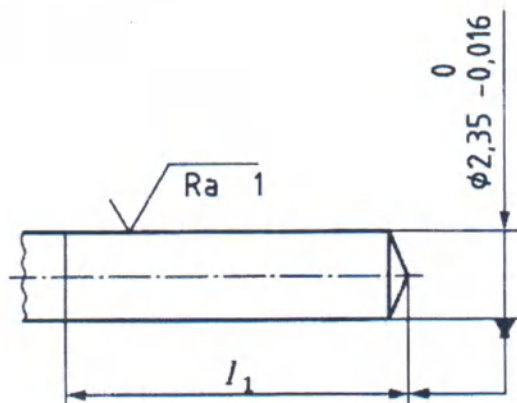

Диаметр $2,35 (+0/-0,016) \text{ мм};$
 Шероховатость поверхности хвостовика $\leq 1 \text{ мкм}$
 Твердость $\geq 250 \text{ VH } 5.$

Хвостовик тип 3

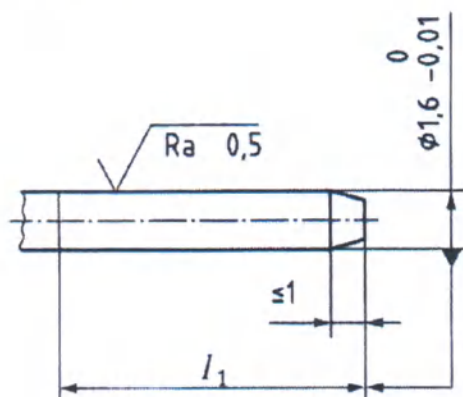

Диаметр $1,6 (+0/-0,01)$
 Шероховатость поверхности хвостовика $\leq 0,5 \text{ мкм}$
 Твердость $\geq 250 \text{ VH } 5.$
 Сферическая форма торца.

14. Технические характеристики и состав

14.1. I. Набор KENDA NOBILIS:

REF 0300.006A, REF 0300.012, REF 0301.006, REF 0301.012, REF 0301.025, REF 0301.100, REF 0302.006, REF 0302.012, REF 0302.025, REF 0302.100, REF 0303.006, REF 0303.012, REF 0303.025, REF 0303.100, REF 0304.006, REF 0304.012, REF 0304.025, REF 0304.100, REF 0305.006, REF 0305.012, REF 0305.025, REF 0305.100, REF 0306.006, REF 0306.012, REF 0306.025, REF 0306.100, REF 0307.006, REF 0307.012, REF 0307.025, REF 0307.100, REF 0308.006, REF 0308.012, REF 0308.025, REF 0308.100, REF 0309.006, REF 0309.012, REF 0309.025, REF 0309.100, REF 0310.006, REF 0310.012, REF 0310.025, REF 0310.100, REF 0311.006, REF 0311.012, REF 0311.025, REF 0311.100.

14.1.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров с алмазными частицами мелкой зернистости для одношаговой обработки. Представлены одиннадцатью формами полирующей головки. Рекомендованы для обработки композитов и керамики. Требуется очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.1.2. Технические характеристики KENDA NOBILIS:

Внешний вид полира	Название в зависимости от Формы и размера полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Пламевидный большой	5.5 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм РА Угловой/
	Пламевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм

	Ножевидный	10 ±0,5	6,5 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный малый плюс	6,0 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

14.1.3. Комплект поставки KENDA NOBILIS

	REF	состав	Общее число полиров наборе в
1	REF 0300.006A	- полир чашевидный средний фиолетовый – 1 шт. - полир копьевидный малый фиолетовый – 2 шт. - полир копьевидный большой фиолетовый – 1 шт. - полир дисковидный фиолетовый – 1 шт. - полир чашевидный большой – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 0300.012	- полир пламевидный большой фиолетовый - 1 шт. - полир пламевидный малый фиолетовый – 1 шт. - полир ножевидный фиолетовый – 1 шт. - полир чашевидный малый фиолетовый – 1 шт. - полир чашевидный средний фиолетовый – 1 шт. - полир копьевидный малый фиолетовый – 3 шт. - полир грушевидный фиолетовый– 1 шт. - полир копьевидный большой фиолетовый – 1 шт. - полир дисковидный фиолетовый - 1 шт. - полир чашевидный большой фиолетовый– 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 0301.006	- полир пламевидный большой фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0301.012	- полир пламевидный большой фиолетовый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0301.025	- полир пламевидный большой фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0301.100	- полир пламевидный большой фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 0302.006	- полир пламевидный малый фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0302.012	- полир пламевидный малый фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0302.025	- полир пламевидный малый фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.

10	REF 0302.100	- полир пламевидный малый фиолетовый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0303.006	- полир ножевидный фиолетовый– 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0303.012	- полир ножевидный фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0303.025	- полир ножевидный фиолетовый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0303.100	- полир ножевидный фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 0304.006	- полир чашевидный малый фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0304.012	- полир чашевидный малый фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0304.025	- полир чашевидный малый фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 0304.100	- полир чашевидный малый фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0305.006	- полир чашевидный средний фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 0305.012	- полир чашевидный средний фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0305.025	- полир чашевидный средний фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 0305.100	- полир чашевидный средний фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0306.006	- полир копьевидный малый фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 0306.012	- полир копьевидный малый фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0306.025	- полир копьевидный малый фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0306.100	- полир копьевидный малый фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

27	REF 0307.006	- полир грушевидный фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0307.012	- полир грушевидный фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 0307.025	- полир грушевидный фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0307.100	- полир грушевидный фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 0308.006	- полир копьевидный большой фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 0308.012	- полир копьевидный большой фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 0308.025	- полир копьевидный большой фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 0308.100	- полир копьевидный большой фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 0309.006	- полир дисковидный фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
36	REF 0309.012	- полир дисковидный фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
37	REF 0309.025	- полир дисковидный фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
38	REF 0309.100	- полир дисковидный фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
39	REF 0310.006	- полир чашевидный большой фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
40	REF 0310.012	- полир чашевидный большой фиолетовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
41	REF 0310.025	- полир чашевидный большой фиолетовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
42	REF 0310.100	- полир чашевидный большой фиолетовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
43	REF 0311.006	- полир чашевидный малый плюс фиолетовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

44	REF 0311.012	- полир чашевидный малый плюс фиолетовый – 12 шт. - инструкция вкладыш	12 шт.
45	REF 0311.025	- полир чашевидный малый плюс фиолетовый – 25 шт. - инструкция вкладыш	25 шт.
46	REF 0311.100	- полир чашевидный малый плюс фиолетовый – 100 шт. - инструкция вкладыш	100 шт.

14. 2. II. Набор KENDA UNICUS:

REF 0350.006A, REF 0350.012, REF 0351.006, REF 0351.012, REF 0351.025, REF 0351.100, REF 0352.006, REF 0352.012, REF 0352.025, REF 0352.100, REF 0353.006, REF 0353.012, REF 0353.025, REF 0353.100, REF 0354.006, REF 0354.012, REF 0354.025, REF 0354.100, REF 0355.006, REF 0355.012, REF 0355.025, REF 0355.100, REF 0356.006, REF 0356.012, REF 0356.025, REF 0356.100, REF 0357.006, REF 0357.012, REF 0357.025, REF 0357.100, REF 0358.006, REF 0358.012, REF 0358.025, REF 0358.100, REF 0359.006, REF 0359.012, REF 0359.025, REF 0359.100, REF 0360.006, REF 0360.012, REF 0360.024, REF 0360.100, REF 0361.006, REF 0361.012, REF 0361.025, REF 0361.100.

14.2.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров с алмазными частицами сверхмелкой зернистости для одношаговой обработки. Рекомендованы для финальной обработки композитов и керамики.
Требует очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации и после каждого использования.

14.2.2. Технические характеристики KENDA UNICUS

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Пламевидный большой	5.5 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA

	Пламевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Ножевидный	10 ±0,5	6.5 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	

	Чашевидный малый плюс	6,0 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	оранжевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
--	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	----------------------	-----------	---------	---------------	--

14.2.3. Комплект поставки KENDA UNICUS

	REF	состав	Общее число полиров наборе в
1	REF 0350.006A	- полир чашевидный средний оранжевый – 1 шт. - полир копьевидный малый оранжевый – 2 шт. - полир копьевидный большой оранжевый – 1 шт. - полир дисковидный оранжевый – 1 шт. - полир чашевидный оранжевый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 0350.012	- полир пламевидный большой оранжевый - 1 шт. - полир пламевидный малый оранжевый – 1 шт. - полир ножевидный оранжевый – 1 шт. - полир чашевидный малый оранжевый – 1 шт. - полир чашевидный средний оранжевый – 1 шт. - полир копьевидный малый оранжевый – 3 шт. - полир грушевидный оранжевый – 1 шт. - полир копьевидный большой оранжевый – 1 шт. - полир дисковидный оранжевый - 1 шт. - полир чашевидный большой оранжевый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 0351.006	- полир пламевидный большой оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0351.012	- полир пламевидный большой оранжевый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0351.025	- полир пламевидный большой оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0351.100	- полир пламевидный большой оранжевый – 100 шт.	100 шт.

		- инструкция-вкладыш	
7	REF 0352.006	- полир пламевидный малый оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0352.012	- полир пламевидный малый оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0352.025	- полир пламевидный малый оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 0352.100	- полир пламевидный малый оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0353.006	- полир ножевидный оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0353.012	- полир ножевидный оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0353.025	- полир ножевидный оранжевый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0353.100	- полир ножевидный оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 0354.006	- полир чашевидный малый оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0354.012	- полир чашевидный малый оранжевый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0354.025	- полир чашевидный малый оранжевый – 25 шт - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 0354.100	- полир чашевидный малый оранжевый – 100 шт - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0355.006	- полир чашевидный средний оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 0355.012	- полир чашевидный средний оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0355.025	- полир чашевидный средний оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 0355.100	- полир чашевидный средний оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0356.006	- полир копьевидный малый оранжевый – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
24	REF 0356.012	- полир копьевидный малый оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0356.025	- полир копьевидный малый оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0356.100	- полир копьевидный малый оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 0357.006	- полир грушевидный оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0357.012	- полир грушевидный оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 0357.025	- полир грушевидный оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0357.100	- полир грушевидный оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 0358.006	- полир копьевидный большой оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 0358.012	- полир копьевидный большой оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 0358.025	- полир копьевидный большой оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 0358.100	- полир копьевидный большой оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 0359.006	- полир дисковидный оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
36	REF 0359.012	- полир дисковидный оранжевый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
37	REF 0359.025	- полир дисковидный оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
38	REF 0359.100	- полир дисковидный оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
39	REF 0360.006	- полир чашевидный большой оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
40	REF 0360.012	- полир чашевидный большой оранжевый – 12 шт.	12 шт.

		- инструкция-вкладыш	
41	REF 0360.025	- полир чашевидный большой оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
42	REF 0360.100	- полир чашевидный большой оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
43	REF 0361.006	- полир чашевидный малый плюс оранжевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
44	REF 0361.012	- полир чашевидный малый плюс оранжевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
45	REF 0361.025	- полир чашевидный малый плюс оранжевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
46	REF 0361.100	- полир чашевидный малый плюс оранжевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 3. III. Набор KENDA COMPLETE:

REF 0500.012A, REF 0500.012, REF 0503.006, REF 0503.012, REF 0503.025, REF 0503.100, REF 0505.006, REF 0505.012, REF 0505.025, REF 0505.100, REF 0508.006, REF 0508.012, REF 0508.025, REF 0508.100, REF 0509.006, REF 0509.012, REF 0509.025, REF 0509.100, REF 0510.006, REF 0510.012, REF 0510.025, REF 0510.100, REF 0513.006, REF 0513.012, REF 0513.025, REF 0513.100, REF 0553.006, REF 0553.012, REF 0553.025, REF 0553.100, REF 0555.006, REF 0555.012, REF 0555.025, REF 0555.100, REF 0558.006, REF 0558.012, REF 0558.025, REF 0558.100, REF 0559.006, REF 0559.012, REF 0559.025, REF 0559.100, REF 0560.006, REF 0560.012, REF 0560.025, REF 0560.100, REF 0563.006, REF 0563.012, REF 0563.025, REF 0563.100.

14.3.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров для двухшаговой обработки, с частицами карбида кремния средней и мелкой зернистости. Рекомендованы для обработки композитов, компомеров, амальгамы, золота.

Обрабатываемая поверхность сначала выравнивается при помощи полира с более крупной зернистостью. Затем применяется более деликатный полир из этого набора для придания блеска.

Требует очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации и после каждого использования.

14.3.2. Технические характеристики KENDA COMPLETE

Внешний вид полира	Название полира в зависимости от Формы и размера	Диаметр головки в самой широкой части	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Тип 1 Хвостовик/ стержень/со вмести́мость с
--------------------	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------	---

	Полировальн ой головки	(мм)								наконечнико м
	Ножевидный	10 ±0,5	6,5 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	среднего размера 75 – 22.8	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная лина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	среднего размера 75 – 22.8	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	среднего размера 75 – 22.8	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	среднего размера 75 – 22.8	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	карбид кремния	среднего размера 75 – 22.8	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

8

	Копьевидный средний	4,0 ±0,5	9,0 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	среднего размера 75 – 22.8	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Ножевидный	10 ±0,5	6.5 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 12.8 – 6.5	Серо- стальной	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный Средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 12.8 – 6.5	Серо- стальной	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 12.8 – 6.5	Серо- стальной	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 12.8 – 6.5	Серо- стальной	0,3 - 2	5'000 – 7'500	

8

Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 12.8 – 6.5	Серо- стальной	0,3 - 2	5'000 – 7'500
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------	---------------

Копьевидный средний	4,0 ±0,5	9,0 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 12.8 – 6.5	Серо- стальной	0,3 - 2	5'000 – 7'500
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------	---------------

14.3.3. Комплект поставки KENDA COMPLETE:

	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 0500.012A	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 2 шт. - полир копьевидный большой светло-бордовый – 2 шт. - полир дисковидный светло-бордовый – 2 шт. - полир чашевидный средний серо-стальной – 2 шт. - полир копьевидный большой серо-стальной – 2 шт. - полир дисковидный серо-стальной – 2 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 0500.012	- полир ножевидный светло бордовый- 2 шт. - полир чашевидный средний светло-бордовый – 2 шт. - полир копьевидный средний светло-бордовый – 2 шт. - полир ножевидный светло серо-стальной - 2 шт. - полир чашевидный средний серо-стальной – 2 шт. - полир копьевидный средний серо-стальной – 2 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

3	REF 0503.006	- полир ножевидный светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0503.012	- полир ножевидный светло-бордовый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0503.025	- полир ножевидный светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0503.100	- полир ножевидный светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 0505.006	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0505.012	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0505.025	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 0505.100	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0513.006	- полир копьевидный средний светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0513.012	- полир копьевидный средний светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0513.025	- полир копьевидный средний светло-бордовый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0513.100	- полир копьевидный средний светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 0553.006	- полир ножевидный серо-стальной – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0553.012	- полир ножевидный серо-стальной – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0553.025	- полир ножевидный серо-стальной – 25 шт - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 0553.100	- полир ножевидный серо-стальной – 100 шт - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0555.006	- полир чашевидный средний серо-стальной – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

20	REF 0555.012	- полир чашевидный средний серо-стальной – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0555.025	- полир чашевидный средний серо-стальной – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 0555.100	- полир чашевидный средний серо-стальной – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0563.006	- полир копьевидный средний серо-стальной – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 0563.012	- полир копьевидный средний серо-стальной – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0563.025	- полир копьевидный средний серо-стальной – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0563.100	- полир копьевидный средний серо-стальной – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 0508.006	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0508.012	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 0508.025	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0508.100	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 0509.006	- полир дисковидный светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 0509.012	- полир дисковидный светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 0509.025	- полир дисковидный светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 0509.100	- полир дисковидный светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 0510.006	- полир чашевидный большой светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
36	REF 0510.012	- полир чашевидный большой светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

37	REF 0510.025	- полир чашевидный большой светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
38	REF 0510.100	- полир чашевидный большой светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
39	REF 0558.006	- полир копьевидный большой серо-стальной – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
40	REF 0558.012	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
41	REF 0558.025	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
42	REF 0558.100	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
43	REF 0559.006	- полир дисковидный серо-стальной – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
44	REF 0559.012	- полир дисковидный серо-стальной – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
45	REF 0559.025	- полир дисковидный серо-стальной – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
46	REF 0559.100	- полир дисковидный серо-стальной – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
47	REF 0560.006	- полир чашевидный большой серо-стальной – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
48	REF 0560.012	- полир чашевидный большой серо-стальной – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
49	REF 0560.025	- полир чашевидный большой серо-стальной – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
50	REF 0560.100	- полир чашевидный большой серо-стальной – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 4. IV. Набор KENDA MAXIMUS:

REF 0380.006A, REF 0380.012, REF 0384.006, REF 0384.012, REF 0384.025, REF 0384.100, REF 0385.006, REF 0385.012, REF 0385.025, REF 0385.100, REF 0386.006, REF 0386.012, REF 0386.025, REF 0386.100, REF 0388.006, REF 0388.012, REF 0388.025, REF 0388.100, REF 0389.006, REF 0389.012, REF 0389.025, REF 0389.100, REF 0390.006, REF 0390.012, REF 0390.025, REF 0390.100, REF 0391.006, REF 0391.012, REF 0391.025, REF 0391.100.

14.4.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров с алмазными частицами сверхмелкой зернистости. Одношаговая техника полировки. Эффективность удаления материала контролируется частотой вращения и силой нажима. При более сильном нажиме и высокой скорости можно выравнивать композитные материалы, при меньшем нажиме и небольшой скорости вращения – добиться блеска поверхностей. Рекомендованы для обработки нанокомпозитов, микрогибридов, микрофильных композитов. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации и после каждого использования.

14.4.2. Технические характеристики KENDA MAXIMUS:

Внешний вид полира	Название полира в зависимости от формы и размера полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 4 - 1	светло-бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	сверхтонкие 4 - 1	светло-бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	сверхтонкие 4 - 1	светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхтонкие 4 - 1	светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхтонкие 4 - 1	светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	алмаз	сверхтонкие 4 - 1	светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный малый плюс	6,0 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхтонкие 4 - 1	светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	

14.4.3. Комплект поставки KENDA MAXIMUS:

	REF	состав	Общее число полиров наборе в
1	REF 0380.006A	- полир чашевидный средний светло-бежевый - 1 шт. - полир копьевидный малый светло-бежевый – 2 шт. - полир копьевидный большой светло-бежевый - 1 шт. - полир дисковидный светло-бежевый – 1 шт. - полир чашевидный большой светло-бежевый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
1	REF 0380.012	- полир чашевидный малый светло-бежевый - 2 шт. - полир чашевидный средний светло-бежевый - 2 шт. - полир копьевидный малый светло-бежевый – 2 шт. - полир копьевидный большой светло-бежевый - 2 шт. - полир дисковидный светло-бежевый – 2 шт. - полир чашевидный большой светло-бежевый – 2 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 0384.006	- полир чашевидный малый светло-бежевый- 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
3	REF 0384.012	- полир чашевидный малый светло-бежевый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
4	REF 0384.025	- полир чашевидный малый светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
5	REF 0384.100	- полир чашевидный малый светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
6	REF 0385.006	- полир чашевидный средний светло- бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
7	REF 0385.012	- полир чашевидный средний светло- бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
8	REF 0385.025	- полир чашевидный средний светло- бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
9	REF 0385.100	- полир чашевидный средний светло- бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
10	REF 0386.006	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

11	REF 0386.012	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
12	REF 0386.025	- полир копьевидный малый светло-бежевый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
13	REF 0386.100	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
14	REF 0388.006	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
15	REF 0388.012	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
16	REF 0388.025	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 25 шт - инструкция-вкладыш	25 шт.
17	REF 0388.100	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 100 шт - инструкция-вкладыш	100 шт.
18	REF 0389.006	- полир дисковидный светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
19	REF 0389.012	- полир полир дисковидный светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
20	REF 0389.025	- полир полир дисковидный светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
21	REF 0389.100	- полир дисковидный светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
22	REF 0390.006	- полир чашевидный большой светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
23	REF 0390.012	- полир чашевидный большой светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
24	REF 0390.025	- полир чашевидный большой светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
25	REF 0390.100	- полир чашевидный большой светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 0391.006	- полир чашевидный малый плюс светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0391.012	- полир чашевидный малый плюс светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

29	REF 0391.025	- полир чашевидный малый плюс светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0391.100	- полир чашевидный малый плюс светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 5. V.Набор KENDA DELUXE:

REF 0400.006A, REF 0400.012, REF 0406.006, REF 0406.012, REF 0406.025, REF 0406.100, REF 0408.006, REF 0408.012, REF 0408.025, REF 0408.100, REF 0409.006, REF 0409.012, REF 0409.025, REF 0409.100, REF 0411.006, REF 0411.012, REF 0411.025, REF 0411.100, REF 0413.006, REF 0413.012, REF 0413.025, REF 0413.100, REF 0456.006, REF 0456.012, REF 0456.025, REF 0456.100, REF 0458.006, REF 0458.012, REF 0458.025, REF 0458.100, REF 0459.006, REF 0459.012, REF 0459.025, REF 0459.100, REF 0461.006, REF 0411.012, REF 0461.025, REF 0461.100, REF 0463.006, REF 0463.012, REF 0463.025, REF 0463.100.

14.5.1.Краткое описание и функциональные характеристики: Наборы полиров для двухшаговой обработки с алмазными частицами мелкой и сверхмелкой зернистости. Рекомендовано для тщательного выравнивания и придания блеска композитов и компомеров.

Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации и после каждого использования.

14.5.2. Технические характеристики KENDA DELUXE:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	светло-зеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная линия (зажимаемая часть) 11,0 мм RA

6

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	светло- зеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	светло- зеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный	6 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	светло- зеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный средний	4 ±0,5	9 ±0,5	0,8 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	светло- зеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный Малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	Светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	Светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	Светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный	6 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	Светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный средний	4 ±0,5	9 ±0,5	0,8 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	Светло- бежевый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

14.5.3. Комплект поставки KENDA DELUXE

	REF	состав	Общее число полиров наборе в
1	REF 0400.006A	- полир копьевидный большой светло-зеленый – 1 шт. - полир дисковидный светло-зеленый – 1 шт. - полир чашевидный светло-зеленый – 1 шт. - полир копьевидный большой светло-бежевый – 1 шт. - полир дисковидный светло-бежевый – 1 шт.	6 шт.

		- полир чашевидный светло-бежевый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	
2	REF 0400.012	- полир копьевидный малый светло-зеленый - 2 шт. - полир дисковидный светло-зеленый - 1 шт. - полир чашевидный светло-зеленый – 1 шт. - полир копьевидный средний светло-зеленый - 2 шт. - полир копьевидный малый светло-бежевый – 2 шт. - полир дисковидный светло-бежевый– 1 шт. - полир чашевидный светло-бежевый– 1 шт. - полир копьевидный средний светло-бежевый - 2 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 0406.006	- полир копьевидный малый светло-зеленый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0406.012	- полир копьевидный малый светло-зеленый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0406.025	- полир копьевидный малый светло-зеленый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0406.100	- полир копьевидный малый светло-зеленый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 0409.006	- полир дисковидный светло-зеленый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0409.012	- полир дисковидный светло-зеленый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0409.025	- полир дисковидный светло-зеленый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 0409.100	- полир дисковидный светло-зеленый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0411.006	- полир чашевидный светло-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0411.012	- полир чашевидный светло-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0411.025	- полир чашевидный светло-зеленый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0411.100	- полир чашевидный светло-зеленый – 100 шт.	100 шт.

		- инструкция-вкладыш	
15	REF 0413.006	- полир копьевидный средний светло-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0413.012	- полир копьевидный средний светло-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0413.025	- полир копьевидный средний светло-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 0413.100	- полир копьевидный средний светло-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0456.006	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 0456.012	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0456.025	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 0456.100	- полир копьевидный малый светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0459.006	- полир дисковидный светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 0459.012	- полир дисковидный светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0459.025	- полир дисковидный светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0459.100	- полир дисковидный светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 0461.006	- полир чашевидный светло-бежевый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0461.012	- полир чашевидный светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 0461.025	- полир чашевидный светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0461.100	- полир чашевидный светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 0463.006	- полир копьевидный средний светло-бежевый – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
32	REF 0463.012	- полир копьевидный средний светло-бежевый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 0463.025	- полир копьевидный средний светло-бежевый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 0463.100	- полир копьевидный средний светло-бежевый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 0408.006	- полир копьевидный большой светло-зеленый – 6 шт. - инструкция вкладыш	6 шт.
36	REF 0408.012	- полир копьевидный большой светло-зеленый – 12 шт. - инструкция вкладыш	12 шт.
37	REF 0408.025	- полир копьевидный большой светло-зеленый – 25 шт. - инструкция вкладыш	25 шт.
38	REF 0408.100	- полир копьевидный большой светло-зеленый – 100 шт. - инструкция вкладыш	100 шт.
39	REF 0458.006	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 6 шт. - инструкция вкладыш	6 шт.
40	REF 0458.012	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 12 шт. - инструкция вкладыш	12 шт.
41	REF 0458.025	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 25 шт. - инструкция вкладыш	25 шт.
42	REF 0458.100	- полир копьевидный большой светло-бежевый – 100 шт. - инструкция вкладыш	100 шт.

14. 6. VI. Набор KENDA HYBRID:

REF 790.012A, REF 790.012, REF 0004.006, REF 0004.012, REF 0004.025, REF 0004.100, REF 0005.006, REF 0005.012, REF 0005.025, REF 0005.100, REF 0006.006, REF 0006.012, REF 0006.025, REF 0006.100, REF 0008.006, REF 0008.012, REF 0008.025, REF 0008.100, REF 0009.006, REF 0009.012, REF 0009.025, REF 0009.100, REF 0010.006, REF 0010.012, REF 0010.025, REF 0010.100, REF 0104.006, REF 0104.012, REF 0104.025, REF 0104.100, REF 0105.006, REF 0105.012, REF 0105.025, REF 0105.100, REF 0106.006, REF 0106.012, REF 0106.025, REF 0106.100, REF 0108.006, REF 0108.012, REF 0108.025, REF 0108.100, REF 0109.006, REF 0109.012, REF 0109.025, REF 0109.100, REF 0110.006, REF 0110.012, REF 0110.025, REF 0110.100, REF 791.006 HP, REF 0006.006 HP, REF 0006.012 HP, REF 0006.025 HP, REF 0006.100 HP, REF 0008.006 HP, REF 0008.012 HP, REF 0008.025 HP, REF 0008.100 HP, REF 0014.006 HP, REF 0014.012 HP, REF 0014.025 HP, REF 0014.100 HP, REF 0106.006 HP, REF

0106.012 HP, REF 0106.025 HP, REF 0106.100 HP, REF 0108.006 HP, REF 108.012 HP, REF 0108.025 HP, REF 0108.100 HP, REF 0114.006 HP, REF 0114.012 HP, REF 114.025 HP, REF 0114.100 HP.

14.6.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Вариант исполнения, содержащий особо твердые полиры двух типов абразива – оксида алюминия и алмаза. Двухшаговый метод обработки. Подходят для всех гибридных композитов. Варианты исполнения представлены полирами как с хвостовиками для угловых наконечников (RA), так и прямых наконечников (HP). Наборы для углового наконечника требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации и после каждого использования. Наборы для прямого наконечника не требуют стерилизации, для зуботехнических лабораторий.

14.6.2. Технические характеристики KENDA HYBRID

Внешний вид полира	Название полира в зависимости от формы и размера Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Светло-серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Светло-серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Светло-серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Светло- серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Светло- серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Светло- серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	Алмаз	сверхмелкие 8 - 4	бледно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Алмаз	сверхмелкие 8 - 4	бледно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	сверхмелкие 8 - 4	бледно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкие 8 - 4	бледно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	сверхмелкие 8 - 4	бледно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,1 ±0,2	алмаз	сверхмелкие 8 - 4	бледно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Оксид алюминия	средние 75 – 22.8	Светло-серый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2 мм

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,6 ±0,2	Оксид алюминия	средние 75 – 22.8	Светло-серый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,8 ±2 мм
	дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,9 ±0,2	Оксид алюминия	средние 75 – 22.8	Светло-серый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	алмаз	ультрамелкие 8 – 4	Бледно- розовый	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2 мм
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,6 ±0,2	алмаз	ультрамелкие 8 – 4	Бледно- розовый	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,8 ±2 мм
	дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,9 ±0,2	алмаз	ультрамелкие 8 – 4	Бледно- розовый	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2мм

14.6.3. Комплект поставки KENDA HYBRID

	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 790.012A	- полир чашевидный средний светло-серый - 1 шт. - полир копьевидный малый светло-серый – 2 шт. - полир копьевидный большой светло-серый - 1 шт. - полир дисковидный светло-серый – 1 шт. - полир чашевидный большой светло- – 1 шт. - полир чашевидный средний бледно-розовый - 1 шт. - полир копьевидный малый бледно-розовый – 2 шт. - полир копьевидный большой бледно-розовый - 1 шт. - полир дисковидный бледно-розовый – 1 шт. - полир чашевидный большой бледно-розовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 790.012	- полир чашевидный малый светло-серый - 1 шт. - полир чашевидный средний светло-серый - 1 шт. - полир копьевидный малый светло-серый – 1 шт. - полир копьевидный большой светло-серый - 1 шт. - полир дисковидный светло-серый – 1 шт. - полир чашевидный большой светло-серый – 1 шт. - полир чашевидный малый бледно розовый– 1 шт. - полир чашевидный средний бледно-розовый - 1 шт. - полир копьевидный малый бледно-розовый – 1 шт. - полир копьевидный большой бледно-розовый - 1 шт. - полир дисковидный бледно-розовый – 1 шт. - полир чашевидный большой бледно-розовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 0004.006	- полир чашевидный малый светло-серый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0004.012	- полир чашевидный малый светло-серый – 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0004.025	- полир чашевидный малый светло-серый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0004.100	- полир чашевидный малый светло-серый - 100 шт.	100 шт.

		- инструкция-вкладыш	
7	REF 0005.006	- полир чашевидный средний светло-серый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0005.012	- полир чашевидный средний светло-серый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0005.025	- полир чашевидный средний светло-серый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 0005.100	- полир чашевидный средний светло-серый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0006.006	- полир копьевидный малый светло-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0006.012	- полир копьевидный малый светло-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0006.025	- полир копьевидный малый светло-серый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0006.100	- полир копьевидный малый светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 0008.006	- полир копьевидный большой светло-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0008.012	- полир копьевидный большой светло-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0008.025	- полир копьевидный большой светло-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 0008.100	- полир копьевидный большой светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0009.006	- полир дисковидный светло-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 0009.012	- полир дисковидный светло-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0009.025	- полир дисковидный светло-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 0009.100	- полир дисковидный светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0010.006	- полир чашевидный большой светло-серый – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
24	REF 0010.012	- полир чашевидный большой светло-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0010.025	- полир чашевидный большой светло-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0010.100	- полир чашевидный большой светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 0104.006	- полир чашевидный малый бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0104.012	- полир чашевидный малый бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 0104.025	- полир чашевидный малый бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0104.100	- полир чашевидный малый бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 0105.006	- полир чашевидный средний бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 0105.012	- полир чашевидный средний бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 0105.025	- полир чашевидный средний бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 0105.100	- полир чашевидный средний бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 0106.006	- полир копьевидный малый бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
36	REF 0106.012	- полир копьевидный малый бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
37	REF 0106.025	- полир копьевидный малый бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
38	REF 0106.100	- полир копьевидный малый бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
39	REF 0108.006	- полир копьевидный большой бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
40	REF 0108.012	- полир копьевидный большой бледно-розовый – 12 шт.	12 шт.

		- инструкция-вкладыш	
41	REF 0108.025	- полир копьевидный большой бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
42	REF 0108.100	- полир копьевидный большой бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
43	REF 0109.006	- полир дисковидный бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
44	REF 0109.012	- полир дисковидный бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
45	REF 0109.025	- полир дисковидный бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
46	REF 0109.100	- полир дисковидный бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
47	REF 0110.006	- полир чашевидный большой бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
48	REF 0110.012	- полир чашевидный большой бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
49	REF 0110.025	- полир чашевидный большой бледно-розовый – 24 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
50	REF 0110.100	- полир чашевидный большой бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
51	REF 791.006 HP	- полир копьевидный малый HP светло-серый – 1 шт., - полир копьевидный большой HP светло-серый – 1 шт., - полир дисковидный HP светло-серый 1 шт., - полир копьевидный малый HP бледно-розовый – 1 шт., - полир копьевидный большой HP бледно-розовый – 1 шт., - полир дисковидный HP бледно-розовый - 1 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
52	REF 0006.006 HP	- полир копьевидный малый HP светло-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
53	REF 0006.012 HP	- полир копьевидный малый HP светло-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
54	REF 0006.025 HP	- полир копьевидный малый HP светло-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.

55	REF 0006.100 HP	- полир копьевидный малый HP светло-серый – 100 шт.	100 шт.
56	REF 0008.006 HP	- полир копьевидный большой HP светло-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
57	REF 0008.012 HP	- полир копьевидный большой HP светло-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
58	REF 0008.025 HP	- полир копьевидный большой HP светло-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
59	REF 0008.100 HP	- полир копьевидный большой HP светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
60	REF 0014.006 HP	- полир дисковидный HP светло-серый 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
61	REF 0014.012 HP	- полир дисковидный HP светло-серый 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
62	REF 0014.025 HP	- полир дисковидный HP светло-серый 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
63	REF 0014.100 HP	- полир дисковидный HP светло-серый 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
64	REF 0106.006 HP	- полир копьевидный малый HP бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
65	REF 0106.012 HP	- полир копьевидный малый HP бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
66	REF 0106.025 HP	- полир копьевидный малый HP бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
67	REF 0106.100 HP	- полир копьевидный малый HP бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
68	REF 0108.006 HP	- полир копьевидный большой HP бледно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
69	REF 0108.012 HP	- полир копьевидный большой HP бледно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
70	REF 0108.025 HP	- полир копьевидный большой HP бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
71	REF 0108.100 HP	- полир копьевидный большой HP бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
		- полир копьевидный малый HP бледно-розовый – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
73	REF 0114.012 HP	- полир дисковидный HP бледно-розовый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
74	REF 0114.025 HP	- полир дисковидный HP бледно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
75	REF 0114.100 HP	- полир дисковидный HP бледно-розовый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 7. VII. Набор KENDA COMPOSITE MICROFILL:

REF 750.012A, REF 750.012, REF 4001.006, REF 4001.012, REF 4001.025, REF 4001.100, REF 4002.006, REF 4002.012, REF 4002.025, REF 4002.100, REF 4003.006, REF 4003.012, REF 4003.025, REF 4003.100, REF 4004.006, REF 4004.012, REF 4004.025, REF 4004.100, REF 4005.006, REF 4005.012, REF 4005.025, REF 4005.100, REF 4006.006, REF 4006.012, REF 4006.025, REF 4006.100, REF 4007.006, REF 4007.012, REF 4007.025, REF 4007.100, REF 4008.006, REF 4008.012, REF 4008.025, REF 4008.100, REF 4009.006, REF 4009.012, REF 4009.025, REF 4009.100, REF 4010.006, REF 4010.012, REF 4010.025, REF 4010.100, REF 4011.006, REF 4011.012, REF 4011.025, REF 4011.100, REF 5001.006, REF 5001.012, REF 5001.025, REF 5001.100, REF 5002.006, REF 5002.012, REF 5002.025, REF 5002.100, REF 5003.006, REF 5003.012, REF 5003.025, REF 5003.100, REF 5004.006, REF 5004.012, REF 5004.025, REF 5004.100, REF 5005.006, REF 5005.012, REF 5005.025, REF 5005.100, REF 5006.006, REF 5006.012, REF 5006.025, REF 5006.100, REF 5007.006, REF 5007.012, REF 5007.025, REF 5007.100, REF 5008.006, REF 5008.012, REF 5008.025, REF 5008.100, REF 5009.006, REF 5009.012, REF 5009.025, REF 5009.100, REF 5010.006, REF 5010.012, REF 5010.025, REF 5010.100, REF 5011.006, REF 5011.012, REF 5011.025, REF 5011.100.

14.7.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Варианты исполнения имеют в составе полиры с абразивом из оксида алюминия двух типов – средним и ультрамелким. Двухшаговый метод обработки. Рекомендованы для всех микрофильных композитных материалов и удаления остатков цемента на ортодонтических брекетах. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации и после каждого использования

14.7.2. Технические характеристики KENDA COMPOSITE MICROFILL

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU								

	Пламеви- дный большой	5,5 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная лина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Пламевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Ножевидный	10 ±0,5	6,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,6 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000

	Чашевидный малый плюс	6,0 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	желтый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Пламеви- дный большой	5.4 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	Оксид алюминия	ультрамелко е 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Пламевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	Оксид алюминия	ультрамелко е 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Ножевидный	10 ±0,5	2 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный малый	3 ±0,5	7 ±0,5	0,6 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Грушевидный	3 ±0,5	6 ±0,5	0,6 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный малый плюс	6,0 ±0,5	7,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	сверхтонкие 8 - 3	голубой	0,3 - 2	5'000 – 7'500

14.7.3. Комплект поставки COMPOSITE MICROFILL

	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 750.012A	- полир чашевидный средний желтый – 1 шт. - полир копьевидный малый желтый – 2 шт. - полир копьевидный большой желтый – 1 шт. - полир дисковидный желтый – 1 шт. - полир чашевидный большой желтый – 1 шт. - полир чашевидный средний голубой – 1 шт. - полир копьевидный малый голубой – 2 шт. - полир копьевидный большой голубой – 1 шт. - полир дисковидный голубой – 1 шт. - полир чашевидный большой голубой – 1 шт.	12 шт.
2	REF 750.012	- полир пламевидный большой желтый - 1 шт. - полир пламевидный малый желтый - 1 шт. - полир ножевидный желтый – 1 шт. - полир чашевидный малый желтый - 1 шт. - полир чашевидный средний желтый– 1 шт. - полир копьевидный малый желтый – 1 шт. - полир пламевидный большой голубой– 1 шт.	12 шт.

		- полир пламевидный малый голубой - 1 шт. - полир ножевидный голубой – 1 шт. - полир чашевидный малый голубой - 1 шт. - полир чашевидный средний голубой – 1 шт. - полир копьевидный малый голубой – 1 шт. - инструкция-вкладыш	
3	REF 4001.006	- полир пламевидный большой желтый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 4001.012	- полир пламевидный большой желтый - 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 4001.025	- полир пламевидный большой желтый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 4001.100	- полир пламевидный большой желтый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 4002.006	- полир пламевидный малый желтый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 4002.012	- полир пламевидный малый желтый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 4002.025	- полир пламевидный малый желтый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 4002.100	- полир пламевидный малый желтый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 4003.006	- полир ножевидный желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 4003.012	- полир ножевидный желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 4003.025	- полир ножевидный желтый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 4003.100	- полир ножевидный желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 4004.006	- полир чашевидный малый желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 4004.012	- полир чашевидный малый желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 4004.025	- полир чашевидный малый желтый – 25 шт.	25 шт.

		- инструкция-вкладыш	
18	REF 4004.100	- полир чашевидный малый желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 4005.006	- полир чашевидный средний желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 4005.012	- полир чашевидный средний желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 4005.025	- полир чашевидный средний желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 4005.100	- полир чашевидный средний желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 4006.006	- полир копьевидный малый желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 4006.012	- полир копьевидный малый желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 4006.025	- полир копьевидный малый желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 4006.100	- полир копьевидный малый желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 4007.006	- полир грушевидный желтый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 4007.012	- полир грушевидный желтый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 4007.025	- полир грушевидный желтый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 4007.100	- полир грушевидный желтый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 4008.006	- полир копьевидный большой желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 4008.012	- полир копьевидный большой желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 4008.025	- полир копьевидный большой желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 4008.100	- полир копьевидный большой желтый – 100 шт.	100 шт.

		- инструкция-вкладыш	
34	REF 5001.006	- полир пламевидный большой голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
35	REF 5001.012	- полир пламевидный большой голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
36	REF 5001.025	- полир пламевидный большой голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
37	REF 5001.100	- полир пламевидный большой голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
38	REF 5002.006	- полир пламевидный малый голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
39	REF 5002.012	- полир пламевидный малый голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
40	REF 5002.025	- полир пламевидный малый голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
41	REF 5002.100	- полир пламевидный малый голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
42	REF 5003.006	- полир ножевидный голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
43	REF 5003.012	- полир ножевидный голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
44	REF 5003.025	- полир ножевидный голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
45	REF 5003.100	- полир ножевидный голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
46	REF 5004.006	- полир чашевидный малый голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
47	REF 5004.012	- полир чашевидный малый голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
48	REF 5004.025	- полир чашевидный малый голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
49	REF 5004.100	- полир чашевидный средний голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
50	REF 5005.006	- полир чашевидный средний голубой – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
51	REF 5005.012	- полир чашевидный средний голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
52	REF 5005.025	- полир чашевидный средний голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
53	REF 5005.100	- полир чашевидный средний голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
54	REF 5006.006	- полир копьевидный малый голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
55	REF 5006.012	- полир копьевидный малый голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
56	REF 5006.025	- полир копьевидный малый голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
57	REF 5006.100	- полир копьевидный малый голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
58	REF 5007.006	- полир грушевидный голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
59	REF 5007.012	- полир грушевидный голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
60	REF 5007.025	- полир грушевидный голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
61	REF 5007.100	- полир грушевидный голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
62	REF 5008.006	- полир копьевидный большой голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
63	REF 5008.012	- полир копьевидный большой голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
64	REF 5008.025	- полир копьевидный большой голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
65	REF 5008.100	- полир копьевидный большой голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
66	REF 4009.006	- полир дисковидный желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
67	REF 4009.012	- полир дисковидный желтый – 12 шт.	12 шт.

		- инструкция-вкладыш	
68	REF 4009.025	- полир дисковидный желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
69	REF 4009.100	- полир дисковидный желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
70	REF 4010.006	- полир чашевидный большой желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
71	REF 4010.012	- полир чашевидный большой желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
72	REF 4010.025	- полир чашевидный большой желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
73	REF 4010.100	- полир чашевидный большой желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
74	REF 4011.006	- полир чашевидный малый плюс желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
75	REF 4011.012	- полир чашевидный малый плюс желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
76	REF 4011.025	- полир чашевидный малый плюс желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
77	REF 4011.100	- полир чашевидный малый плюс желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
78	REF 5009.006	- полир дисковидный голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
79	REF 5009.012	- полир дисковидный голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
80	REF 5009.025	- полир дисковидный голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
81	REF 5009.100	- полир дисковидный голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
82	REF 5010.006	- полир чашевидный большой голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
83	REF 5010.012	- полир чашевидный большой голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
84	REF 5010.025	- полир чашевидный большой голубой – 25 шт.	25 шт.

		- инструкция-вкладыш	
85	REF 5010.100	- полир чашевидный большой голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
86	REF 5011.006	- полир чашевидный малый плюс желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
87	REF 5011.012	- полир чашевидный малый плюс желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
88	REF 5011.025	- полир чашевидный малый плюс желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
89	REF 5011.100	- полир чашевидный малый плюс желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.8. VIII. Набор KENDA C.G.I.:

REF 900.ASS.012, REF SA900.ASS.012, REF 900.ASS.025, REF 905.ASS.012, REF 905.ASS.025, REF 908.ASS.012, REF 908.ASS.025, REF 909.ASS.012, REF 909.ASS.025, REF 910.ASS.012, REF 910.ASS.025, REF 905.C.006, REF 905.C.012, REF 905.C.025, REF 905.C.100, REF 905.F.006, REF 905.F.012, REF 905.F.025, REF 905.F.100, REF 905.M.006, REF 905.M.012, REF 905.M.025, REF 905.M.100, REF 908.C.006, REF 908.C.012, REF 908.C.025, REF 908.C.100, REF 908.F.006, REF 908.F.012, REF 908.F.025, REF 908.F.100, REF 908.M.006, REF 908.M.012, REF 908.M.025, REF 908.M.100, REF 909.C.006, REF 909.C.012, REF 909.C.025, REF 909.C.100, REF 909.F.006, REF 909.F.012, REF 909.F.025, REF 909.F.100, REF 909.M.006, REF 909.M.012, REF 909.M.025, REF 909.M.100, REF 910.C.006, REF 910.C.012, REF 910.C.025, REF 910.C.100, REF 910.F.006, REF 910.F.012, REF 910.F.025, REF 910.F.100, REF 910.M.006, REF 910.M.012, REF 910.M.025, REF 910.M.100, REF 933.C.006, REF 933.C.012, REF 933.C.025, REF 933.C.100, REF 933.F.006, REF 933.F.006, REF 933.F.012, REF 933.F.025, REF 933.M.100, REF 933.M.006, REF 933.M.012, REF 933.M.025, REF 933.M.100.

14.8.1. Краткое описание, функциональные характеристики: композиты, компомеры, стеклоиномеры

Варианты исполнения имеют в составе полиры с абразивом из оксида алюминия трех типов – грубым, средним и ультрамелким (для удаления материала, финальной обработки и полировки). Трехшаговый метод обработки. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.8.2. Технические характеристики KENDA C.G.I.

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
--------------------	-----------------------------	--	---------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------	--

	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	белый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная лина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	белый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	Грубая 150 - 63	белый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	белый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	средняя 75 – 22.8	зеленый	0,3 - 2	3'000 – 7'500	

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средняя 75 – 22.8	зеленый	0,3 - 2	3'000 – 7'500
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средняя 75 – 22.8	зеленый	0,3 - 2	3'000 – 7'500
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	средняя 75 – 22.8	зеленый	0,3 - 2	3'000 – 7'500
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	ультрамелькая 8 - 3	розовый	0,3 - 2	3'000 – 7'500
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	ультрамелькая 8 - 3	розовый	0,3 - 2	3'000 – 7'500

	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	ультрамелькая 8 - 3	розовый	0,3 - 2	3'000 – 7'500	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	ультрамелькая 8 - 3	розовый	0,3 - 2	3'000 – 7'500	

14.8.3. Комплект поставки KENDA C.G.I.:

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 900.ASS.012	- полир чашевидный средний белый - 1 шт. - полир копьевидный большой белый – 1 шт. - полир дисковидный белый – 1 шт. - полир чашевидный большой белый – 1 шт. - полир чашевидный средний зеленый - 1 шт. - полир копьевидный большой зеленый – 1 шт. - полир дисковидный зеленый – 1 шт. - полир чашевидный большой зеленый – 1 шт. - полир чашевидный средний розовый - 1 шт. - полир копьевидный большой розовый – 1 шт. - полир дисковидный розовый – 1 шт. - полир чашевидный большой розовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF SA900.ASS.012	- полир чашевидный средний белый - 2 шт. - полир чашевидный средний зеленый - 2 шт.	12 шт.

		- полир чашевидный средний розовый - 2 шт. - полир копьевидный большой белый – 2 шт. - полир копьевидный большой розовый – 2 шт. - полир копьевидный большой розовый – 2 шт. - инструкция-вкладыш	
3	REF 900.ASS.025	- полир дисковидный белый – 6 шт. - полир дисковидный зеленый – 2 шт. - полир дисковидный розовый – 2 шт. - полир копьевидный большой белый – 6 шт. - полир копьевидный большой зеленый – 2 шт. - полир копьевидный большой розовый – 2 шт. - полир чашевидный большой белый – 3 шт. - полир чашевидный большой зеленый – 1 шт. - полир чашевидный большой розовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
4	REF 905.ASS.012	- полир чашевидный средний белый - 4 шт. - полир чашевидный средний зеленый – 4 шт. - полир чашевидный средний розовый – 4 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 905.ASS.025	- полир чашевидный средний белый – 15 шт. - полир чашевидный средний зеленый – 5 шт. - полир чашевидный средний розовый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 908.ASS.012	- полир копьевидный большой белый – 4 шт. - полир копьевидный большой зеленый – 4 шт. - полир копьевидный большой розовый – 4 шт.	12 шт.
7	REF 908.ASS.025	- полир копьевидный большой белый – 15 шт. - полир копьевидный большой зеленый – 5 шт. - полир копьевидный большой розовый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
8	REF 909.ASS.012	- полир дисковидный белый - 4 шт. - полир дисковидный зеленый - 4 шт. - полир дисковидный розовый - 4 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

9	REF 909.ASS.025	- полир дисковидный белый - 15 шт. - полир дисковидный зеленый - 5 шт. - полир дисковидный розовый - 5 шт.	25 шт.
10	REF 910.ASS.012	- полир чашевидный большой белый – 4 шт. - полир чашевидный большой зеленый – 4 шт. - полир чашевидный большой розовый – 4 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
11	REF 910.ASS.025	- полир чашевидный большой белый – 15 шт. - полир чашевидный большой зеленый – 5 шт. - полир чашевидный большой розовый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
12	REF 905.C.006	- полир чашевидный средний белый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
13	REF 905.C.012	- полир чашевидный средний белый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
14	REF 905.C.025	- полир чашевидный средний белый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
15	REF 905.C.100	- полир чашевидный средний белый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
16	REF 905.F.006	- полир чашевидный средний розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
17	REF 905.F.012	- полир чашевидный средний розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
18	REF 905.F.025	- полир чашевидный средний розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
19	REF 905.F.100	- полир чашевидный средний розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
20	REF 905.M.006	- полир чашевидный средний зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
21	REF 905.M.012	- полир чашевидный средний зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
22	REF 905.M.025	- полир чашевидный средний зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.

23	REF 905.M.100	- полир чашевидный средний зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
24	REF 908.C.006	- полир копьевидный большой белый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
25	REF 908.C.012	- полир копьевидный большой белый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
26	REF 908.C.025	- полир копьевидный большой белый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
27	REF 908.C.100	- полир копьевидный большой белый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
28	REF 908.F.006	- полир копьевидный большой розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
29	REF 908.F.012	- полир копьевидный большой розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
30	REF 908.F.024	- полир копьевидный большой розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
31	REF 908.F.100	- полир копьевидный большой розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
32	REF 908.M.006	- полир копьевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
33	REF 908.M.012	- полир копьевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
34	REF 908.M.025	- полир копьевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
35	REF 908.M.100	- полир копьевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
36	REF 909.C.006	- полир дисковидный белый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
37	REF 909.C.012	- полир дисковидный белый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
38	REF 909.C.025	- полир дисковидный белый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
39	REF 909.C.100	- полир дисковидный белый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

40	REF 909.F.006	- полир дисковидный розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
41	REF 909.F.012	- полир дисковидный розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
42	REF 909.F.025	- полир дисковидный розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
43	REF 909.F.100	- полир дисковидный розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
44	REF 909.M.006	- полир дисковидный зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
45	REF 909.M.012	- полир дисковидный зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
46	REF 909.M.025	- полир дисковидный зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
47	REF 909.M.100	- полир дисковидный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
48	REF 910.C.006	- полир чашевидный большой белый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
49	REF 910.C.012	- полир чашевидный большой белый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
50	REF 910.C.025	- полир чашевидный большой белый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
51	REF 910.C.100	- полир чашевидный большой белый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
52	REF 910.F.006	- полир чашевидный большой розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
53	REF 910.F.012	- полир чашевидный большой розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
54	REF 910.F.025	- полир чашевидный большой розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
55	REF 910.F.100	- полир чашевидный большой розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
56	REF 910.M.006	- полир чашевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

57	REF 910.M.012	- полир чашевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
58	REF 910.M.025	- полир чашевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
59	REF 910.M.100	- полир чашевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
60	REF 933.C.006	- полир копьевидный большой белый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
61	REF 933.C.012	- полир копьевидный большой белый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
62	REF 933.C.025	- полир копьевидный большой белый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
63	REF 933.C.100	- полир копьевидный большой белый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
64	REF 933.F.006	- полир копьевидный большой розовый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
65	REF 933.F.012	- полир копьевидный большой розовый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
66	REF 933.F.025	- полир копьевидный большой розовый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
67	REF 933.F.100	- полир копьевидный большой розовый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
68	REF 933.M.006	- полир копьевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
69	REF 933.M.012	- полир копьевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
70	REF 933.M.025	- полир копьевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
71	REF 933.M.100	- полир копьевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 9. IX. Набор KENDA ZIRCOVIS:

REF 0250.006A, REF 0250.012, REF 0255.006, REF 0255.012, REF 0255.025, REF 0255.100, REF 0256.006, REF 0256.012, REF 0256.025, REF 0256.100, REF 0258.006, REF 0258.012, REF 0258.025, REF 0258.100, REF 0265.006, REF 0265.012, REF 0265.025, REF 0265.100, REF 0266.006, REF 0266.012, REF 0266.025, REF 0266.100, REF 0268.006, REF 0268.012, REF 0268.025, REF 0268.100.

14.9.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Варианты исполнения имеют в составе полиры с абразивом из алмазной крошки двух типов – средним и мелким, для двухшаговой обработки. Рекомендуются для подгонки коронок из оксида циркония и оксида алюминия. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.9.2. Технические характеристики KENDA ZIRCOVIS

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	средний 69 - 32	Темный синезеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	алмаз	средний 69 - 32	Темный синезеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	средний 69 - 32	Темный синезеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	Светлый сине-зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	Светлый сине-зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Мелкие 32 - 8	Светлый сине-зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

14.9.3. Комплект поставки KENDA ZIRCOVIS:

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 0250.006A	- полир чашевидный средний темный сине-зеленый – 1 шт. - полир копьевидный малый темный сине-зеленый – 1 шт. - полир копьевидный большой темный сине-зеленый – 1 шт. - полир чашевидный средний светлый сине-зеленый – 1 шт. - полир копьевидный малый светлый сине-зеленый – 1 шт. - полир копьевидный большой светлый сине-зеленый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 0250.012	- полир чашевидный средний темный сине-зеленый – 2 шт. - полир копьевидный малый темный сине-зеленый – 2 шт. - полир копьевидный большой темный сине-зеленый – 2 шт.	12 шт.

		- полир чашевидный средний светлый сине-зеленый – 2 шт. - полир копьевидный малый светлый сине-зеленый – 2 шт. - полир копьевидный большой светлый сине-зеленый – 2 шт. - инструкция-вкладыш	
3	REF 0255.006	- полир чашевидный средний темный сине-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0255.012	- полир чашевидный средний темный сине-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0255.025	- полир чашевидный средний темный сине-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0255.100	- полир чашевидный средний темный сине-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 0256.006	- полир копьевидный малый темный сине-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0256.012	- полир копьевидный малый темный сине-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0256.025	- полир копьевидный малый темный сине-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 0256.100	- полир копьевидный малый темный сине-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0258.006	- полир копьевидный большой темный сине-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0258.012	- полир копьевидный большой темный сине-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0258.025	- полир копьевидный большой темный сине-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0258.100	- полир копьевидный большой темный сине-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 0265.006	- полир чашевидный средний светлый сине-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0265.012	- полир чашевидный средний светлый сине-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0265.025	- полир чашевидный средний светлый сине-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.

18	REF 0265.100	- полир чашевидный средний светлый сине-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0266.006	- полир копьевидный малый светлый сине-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 0266.012	- полир копьевидный малый светлый сине-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0266.025	- полир копьевидный малый светлый сине-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 0266.100	- полир копьевидный малый светлый сине-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0268.006	- полир копьевидный большой светлый сине-зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 0268.012	- полир копьевидный большой светлый сине-зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0268.025	- полир копьевидный большой светлый сине-зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0268.100	- полир копьевидный большой светлый сине-зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.10. X. Набор KENDA ALL CERAMIC:

REF 0200.006A, REF 0200.012, REF 0215.006, REF 0215.012, REF 0215.025, REF 0215.100, REF 0216.006, REF 0216.012, REF 0216.025, REF 0216.100, REF 0218.006, REF 0218.012, REF 0218.025, REF 0218.100, REF 0219.006, REF 0219.012, REF 0219.025, REF 0219.100, REF 0225.006, REF 0225.012, REF 0225.025, REF 0225.100, REF 0226.006, REF 0226.012, REF 0226.025, REF 0226.100, REF 0228.006, REF 0228.012, REF 0228.025, REF 0228.100, REF 0229.006, REF 0229.012, REF 0229.025, REF 0229.100

14.10.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Варианты исполнения имеют в составе полиры с абразивом из алмазной крошки двух типов – средним и сверхмелким. Рекомендуются для всех типов керамики и оксида циркония. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.10.2. Технические характеристики KENDA ALL CERAMIC:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой	Длина Головки полира	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость
--------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

		широкой части (мм)	(мм)							с наконечнико м
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	средний 69 – 32 (синяя полоса на хвостовике)	средний бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная лина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	средний 69 – 32 (синяя полоса на хвостовике)	средний бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	средний 69 – 32 (синяя полоса на хвостовике)	средний бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	средний 69 – 32 (синяя полоса на хвостовике)	средний бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	Сверхмелкая 8-4 (желтая полоса на хвостовике)	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	алмаз	Сверхмелкая 8-4 (желтая полоса на хвостовике)	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Сверхмелкая 8-4 (желтая полоса на хвостовике)	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	Сверхмелкая 8-4 (желтая полоса на хвостовике)	Светло- бордовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000

14.10.3. Комплект поставки KENDA ALL CERAMIC:

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 0200.006A	- полир чашевидный средний средне-бордовый – 1 шт. - полир копьевидный большой средне-бордовый – 1 шт. - полир дисковидный средне-бордовый – 1 шт. - полир чашевидный средний светло-бордовый – 1 шт. - полир копьевидный большой светло-бордовый – 1 шт. - полир дисковидный светло-бордовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 0200.012	- полир чашевидный средний средне-бордовый – 1 шт. - полир копьевидный малый средне-бордовый – 3 шт.	12 шт.

		- полир копьевидный большой средне-бордовый – 1 шт. - полир дисковидный средне-бордовый – 1 шт. - полир чашевидный средний светло-бордовый – 1 шт. - полир копьевидный малый светло-бордовый – 3 шт. - полир копьевидный большой светло-бордовый – 1 шт. - полир дисковидный светло-бордовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	
3	REF 0215.006	- полир чашевидный средний средне-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 0215.012	- полир чашевидный средний средне-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 0215.025	- полир чашевидный средний средне-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 0215.100	- полир чашевидный средний средне-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 0216.006	- полир копьевидный малый средне-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 0216.012	- полир копьевидный малый средне-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 0216.025	- полир копьевидный малый средне-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 0216.100	- полир копьевидный малый средне-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 0218.006	- полир копьевидный большой средне-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 0218.012	- полир копьевидный большой средне-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 0218.025	- полир копьевидный большой средне-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 0218.100	- полир копьевидный большой средне-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 0219.006	- полир дисковидный средне-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 0219.012	- полир дисковидный средне-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 0219.025	- полир дисковидный средне-бордовый – 25 шт.	25 шт.

		- инструкция-вкладыш	
18	REF 0219.100	- полир дисковидный средне-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 0225.006	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 0225.012	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 0225.025	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 25 шт.	25 шт.
22	REF 0225.100	- полир чашевидный средний светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 0226.006	- полир копьевидный малый светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 0226.012	- полир копьевидный малый светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 0226.025	- полир копьевидный малый светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 0226.100	- полир копьевидный малый светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 0228.006	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 0228.012	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 0228.025	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 0228.100	- полир копьевидный большой светло-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 0229.006	- полир дисковидный средне-бордовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 0229.012	- полир дисковидный средне-бордовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 0229.025	- полир дисковидный средне-бордовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 0229.100	- полир дисковидный средне-бордовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.11. XI. Набор KENDA DIAGUM

REF 780.012, REF 6001.006, REF 6001.012, REF 6001.025, REF 6001.100, REF 6002.006, REF 6002.012, REF 6002.025, REF 6002.100, REF 6003.006, REF 6003.012, REF 6003.025, REF 6003.100, REF 6004.006, REF 6004.012, REF 6004.025, REF 6004.100, REF 6005.006, REF 6005.012, REF 6005.025, REF 6005.100, REF 6006.006, REF 6006.012, REF 6006.025, REF 6006.100, REF 6007.006, REF 6007.012, REF 6007.025, REF 6007.100, REF 6008.006, REF 6008.012, REF 6008.025, REF 6008.100, REF X003.006, REF X003.012, REF X003.025, REF X003.100, REF X004.006, REF X004.012, REF X004.025, REF X004.100, REF X005.006, REF X005.012, REF X005.025, REF X005.100, REF X006.006, REF X006.012, REF 006.025, REF X006.100, REF X007.006, REF X007.012, REF X007.025, REF X007.100, REF X008.006, REF X008.012, REF X008.025, REF X008.100, REF 781.006 HP, REF 6106.006 HP, REF 6106.012 HP, REF 6106.025 HP, REF 106.100 HP, REF 6108.006 HP, REF 6108.012 HP, REF 6108.025 HP, REF 6108.100 HP, REF 6110.006 HP, REF 6110.012 HP, REF 6110.025 HP, REF 6110.100 HP, REF 6114.006 HP, REF 6114.012 HP, REF 6114.025 HP, REF 6114.100 HP, REF X006.006 HP, REF X006.012 HP, REF X006.025 HP, REF 006.100 HP, REF X008.006 HP, REF X008.012 HP, REF X008.025 HP, REF X008.100 HP, REF X010.006 HP, REF X010.012 HP, REF X010.025 HP, REF X010.100 HP, REF X014.006 HP, REF X014.012 HP, REF X014.025 HP, REF X014.100 HP.

14.11.1. Рекомендации для обработки:

Варианты исполнения имеют в составе полиры с абразивом из алмазной крошки ультратонкой зернистости и карбида кремния грубой зернистости. Двухшаговый метод стерилизации. Рекомендованы для обработки керамики. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования. Представлены полирами с хвостовиками для углового наконечника, так и для прямого наконечника.

14.11.2. Технические характеристики KENDA DIAGUM:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Пламевидный большой	5,5 ±0,5	13 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм РА Угловой/

	Пламевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Ножевидный	10 ±0,5	6,5 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	Грубая 75 – 22.8	серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Ножевидный	10 ±0,5	6,5 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Копьевидный Малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,7 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 - 1	темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Карбид кремния	грубая 75 – 22.8	Серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2 мм
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,6 ±0,2	Карбид кремния	грубая 75 – 22.8	Серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,8 ±2 мм
	колесовидны й	12 ±0,5	7,0 ±0,5	2,0 ±0,2	Карбид кремния	грубая 75 – 22.8	Серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,8 ±0,2	Карбид кремния	грубая 75 – 22.8	Серый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Алмаз	Ультрамелк ая 4 – 1	Темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2мм
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,6 ±0,2	Алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	Темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	(для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,8 ±2 мм
	Колесовидны й	12 ±0,5	7,0 ±0,5	2,1 ±0,2	Алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	Темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	Дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,8 ±0,2	алмаз	ультрамелк ая 4 – 1	Темно- розовый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм

14.11.3. Комплект поставки KENDA DIAGUM:

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе (шт)
1	REF 780.012	- полир ножевидный серый - 1 шт. - полир чашевидный малый серый – 1 шт. - полир чашевидный средний серый – 1 шт. - полир копьевидный малый серый – 1 шт. - полир грушевидный серый – 1 шт. - полир копьевидный большой серый – 1 шт. - полир ножевидный темно-розовый - 1 шт. - полир чашевидный малый темно-розовый – 1 шт. - полир чашевидный средний темно-розовый – 1 шт. - полир копьевидный малый темно-розовый – 1 шт. - полир грушевидный темно-розовый – 1 шт. - полир копьевидный большой темно-розовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 6001.006	- полир пламевидный большой серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
3	REF 6001.012	- полир пламевидный большой серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
4	REF 6001.025	- полир пламевидный большой серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
5	REF 6001.100	- полир пламевидный большой серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
6	REF 6002.006	- полир пламевидный малый серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
7	REF 6002.012	- полир пламевидный малый серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
8	REF 6002.025	- полир пламевидный малый серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
9	REF 6002.100	- полир пламевидный малый серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

10	REF 6003.006	- полир ножевидный серый - 6 шт - инструкция-вкладыш	6 шт.
11	REF 6003.012	- полир ножевидный серый - 12 шт - инструкция-вкладыш	12 шт.
12	REF 6003.025	- полир ножевидный серый - 25 шт - инструкция-вкладыш	25 шт.
13	REF 6003.100	- полир ножевидный серый - 100 шт - инструкция-вкладыш	100 шт.
14	REF 6004.006	- полир чашевидный малый серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
15	REF 6004.012	- полир чашевидный малый серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
16	REF 6004.025	- полир чашевидный малый серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
17	REF 6004.100	- полир чашевидный малый серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
18	REF 6005.006	- полир чашевидный средний серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
19	REF 6005.012	- полир чашевидный средний серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
20	REF 6005.025	- полир чашевидный средний серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
21	REF 6005.100	- полир чашевидный средний серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
22	REF 6006.006	- полир копьевидный малый серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
23	REF 6006.012	- полир копьевидный малый серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
24	REF 6006.025	- полир копьевидный малый серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
25	REF 6006.100	- полир копьевидный малый серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
26	REF 6007.006	- полир грушевидный серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
27	REF 6007.012	- полир грушевидный серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

28	REF 6007.025	- полир грушевидный серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
29	REF 6007.100	- полир грушевидный серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100
30	REF 6008.006	- полир копьевидный большой серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
31	REF 6008.012	- полир копьевидный большой серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
32	REF 6008.025	- полир копьевидный большой серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
33	REF 6008.100	- полир копьевидный большой серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
34	REF X003.006	- полир ножевидный темно-розовый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
35	REF X003.012	- полир ножевидный темно-розовый - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
36	REF X003.025	- полир ножевидный темно-розовый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
37	REF X003.100	- полир ножевидный темно-розовый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
38	REF X004.006	- полир чашевидный малый темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
39	REF X004.012	- полир чашевидный малый темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
40	REF X004.025	- полир чашевидный малый темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
41	REF X004.100	- полир чашевидный малый темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
42	REF X005.006	- полир чашевидный большой темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
43	REF X005.012	- полир чашевидный большой темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
44	REF X005.025	- полир чашевидный большой темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
45	REF X005.100	- полир чашевидный большой темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

46	REF X006.006	- полир копьевидный малый темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
47	REF X006.012	- полир копьевидный малый темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
48	REF X006.025	- полир копьевидный малый темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
49	REF X006.100	- полир копьевидный малый темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
50	REF X007.006	- полир грушевидный темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
51	REF X007.012	- полир грушевидный темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
52	REF X007.025	- полир грушевидный темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
53	REF X007.100	- полир грушевидный темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
54	REF X008.006	- полир копьевидный большой темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
55	REF X008.012	- полир копьевидный большой темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
56	REF X008.025	- полир копьевидный большой темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
57	REF X008.100	- полир копьевидный большой темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
58	REF 781.006 HP	- полир копьевидный малый серый – 1 шт., - полир копьевидный большой серый – 1 шт., - полир дисковидный серый – 1 шт., - полир копьевидный малый темно-розовый – 1 шт., - полир копьевидный большой темно-розовый – 1 шт., - полир дисковидный темно-розовый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
59	REF 6106.006 HP	- полир копьевидный малый серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
60	REF 6106.012 HP	- полир копьевидный малый серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
61	REF 6106.025 HP	- полир копьевидный малый серый – 25 шт.	25 шт.



		- инструкция-вкладыш	
62	REF 6106.100 HP	- полир копьевидный малый серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
63	REF 6108.006 HP	- полир копьевидный большой серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
64	REF 6108.012 HP	- полир копьевидный большой серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
65	REF 6108.025 HP	- полир копьевидный большой серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
66	REF 6108.100 HP	- полир копьевидный большой серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
67	REF 6110.006 HP	- полир колесовидный серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
68	REF 6110.012 HP	- полир колесовидный серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
69	REF 6110.025 HP	- полир колесовидный серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
70	REF 6110.100 HP	- полир колесовидный серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
71	REF 6114.006 HP	- полир дисковидный серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
72	REF 6114.012 HP	- полир дисковидный серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
73	REF 6114.025 HP	- полир дисковидный серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
74	REF 6114.100 HP	- полир дисковидный серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
75	REF X006.006 HP	- полир копьевидный малый темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
76	REF X006.012 HP	- полир копьевидный малый темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
77	REF X006.025 HP	- полир копьевидный малый темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
78	REF X006.100 HP	- полир копьевидный малый темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
79	REF X008.006 HP	- полир копьевидный большой темно-розовый – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
80	REF X008.012 HP	- полир копьевидный большой темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
81	REF X008.025 HP	- полир копьевидный большой темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
82	REF X008.100 HP	- полир копьевидный большой темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
83	REF X010.100 HP	- полир колесовидный темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
84	REF X010.100 HP	- полир колесовидный темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
85	REF X010.100 HP	- полир колесовидный темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
86	REF X010.100 HP	- полир колесовидный темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
87	REF X014.100 HP	- полир дисковидный темно-розовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
88	REF X014.100 HP	- полир дисковидный темно-розовый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
89	REF X014.100 HP	- полир дисковидный темно-розовый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
90	REF X014.100 HP	- полир дисковидный темно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.12. XII. Набор KENDA PROPHY:

REF 5100.012, REF 5105.006, REF 5105.012, REF 5105.025, REF 5105.100, REF 5106.006, REF 5106.012, REF 5106.025, REF 5106.100, REF 5108.006, REF 5108.012, REF 5108.025, REF 5108.100, REF 5110.006, REF 5110.012, REF 5110.025, REF 5110.100.

14.12.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Полиры для профессиональной чистки зубов без использования полировочной пасты. Головка полиров содержит один вид абразива – оксид алюминия средней зернистости. Рекомендованы для удаления пятен на зубах. Одношаговый метод обработки. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.12.2. Технические характеристики KENDA PROPHY:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Голубой	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,6 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Голубой	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	Голубой	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	Оксид алюминия	средний 75 – 22.8	голубой	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

14.12.3. Комплект поставки KENDA PROPHY :

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 5100.012	- полир чашевидный средний голубой – 3 шт. - полир копьевидный малый голубой – 3 шт. - полир копьевидный большой голубой – 3 шт. - полир чашевидный большой голубой – 3 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 5105.006	- полир чашевидный средний голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
3	REF 5105.012	- полир чашевидный средний голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
4	REF 5105.025	- полир чашевидный средний голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
5	REF 5105.100	- полир чашевидный средний голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
6	REF 5106.006	- полир копьевидный малый голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
7	REF 5106.012	- полир копьевидный малый голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
8	REF 5106.025	- полир копьевидный малый голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
9	REF 5106.100	- полир копьевидный малый голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
10	REF 5108.006	- полир копьевидный большой голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
11	REF 5108.012	- полир копьевидный большой голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
12	REF 5108.025	- полир копьевидный большой голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
13	REF 5108.100	- полир копьевидный большой голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
14	REF 5110.006	- полир чашевидный большой голубой – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
15	REF 5110.012	- полир чашевидный большой голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
16	REF 5110.025	- полир чашевидный большой голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
17	REF 5110.100	- полир чашевидный большой голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 13. XIII. Набор KENDA PLANUS:

REF 0600.012, REF 0601.006, REF 0601.012, REF 0601.025, REF 0601.100, REF 0608.006, REF 0608.012, REF 0608.025, REF 0608.100, REF 0611.006, REF 0611.012, REF 0611.025, REF 0611.100, REF 0618.006, REF 0618.012, REF 0618.025, REF 0618.100, REF 6700.006, REF 6715.006, REF 6715.012, REF 6715.025, REF 6715.100, REF 6720.006, REF 6720.012, REF 6720.025, REF 6720.100, REF 6815.006, REF 6815.012, REF 6815.025, REF 6815.100, REF 6820.006, REF 6820.012, REF 6820.025, REF 6820.100

14.13.1. Краткое описание, функциональные характеристики: для ортодонтические пластмассы

Полиры с абразивными частицами оксида алюминия двух типов зернистости – грубой и мелкой. Для двухшагового сглаживания и полирования пластиковых протезов. Варианты исполнения представлены полирами как с хвостовиками для угловых наконечников (RA), так и прямых наконечников (HP). Все наборы требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования. Используются в стоматологическом кабинете.

14.13.2. Технические характеристики Набор KENDA PLANUS:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Пламевидный большой для RA	5.5 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	зеленый лаймовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA

	Копьевидный для RA	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	зеленый лаймовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Угловой/ Ø 2,35 (+0/- 0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Пламеви- д- ный большой для RA	5.5 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	Оксид алюминия	Мелкая 12.8 – 6.5	серый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный для RA	5 ±0,5	10 ±0,5	±0,2	Оксид алюминия	Мелкая 12.8 – 6.5	серый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Копьевидный большой для HP	10 ±0,5	18 ±0,5	3,8 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	Зеленый лаймовый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для HP), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ± 1,5 мм
	Цилиндриче- ский закругленный для HP	7,2 ±0,5	20 ±0,5	2,6 ±0,2	Оксид алюминия	грубая 150 - 63	Зеленый лаймовый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для HP), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ± 1,5 мм

	Копьевидный большой для НР	10 ±0,5	18 ±0,5	3,8 ±0,2	Оксид алюминия	Мелкая 12.8 – 6.5	Серый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ± 1,5 мм
	Цилиндричес кий закругленный для НР	7,2 ±0,5	20 ±0,5	2,7 ±0,2	Оксид алюминия	мелкая 12.8 – 6.5	серый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ± 1,5 мм

14.13.3. Комплект поставки KENDA PLANUS:

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 0600.012	- полир пламевидный зеленый лайм, RA– 3 шт., - полир копьевидный большой зеленый лайм RA– 3 шт., - полир пламевидный серый RA– 3 шт., - полир копьевидный большой серый RA - 3 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 0601.006	- полир пламевидный зеленый лаймовый RA– 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
3	REF 0601.012	- полир пламевидный зеленый лаймовый RA– 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
4	REF 0601.025	- полир пламевидный зеленый лаймовый RA– 25 шт.	25 шт.

		- инструкция-вкладыш	
5	REF 0601.100	- полир пламевидный зеленый лаймовый RA – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100шт.
6	REF 0608.006	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый RA – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6шт.
7	REF 0608.012	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый RA – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
8	REF 0608.025	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый RA – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
9	REF 0608.100	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый RA – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
10	REF 0611.006	- полир пламевидный серый RA – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
11	REF 0611.012	- полир пламевидный серый RA – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
12	REF 0611.025	- полир пламевидный серый RA – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
13	REF 0611.100	- полир пламевидный серый RA – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
14	REF 0618 .006	- полир копьевидный большой серый RA – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
15	REF 0618 .012	- полир копьевидный большой серый RA – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
16	REF 0618 .025	- полир копьевидный большой серый RA – 24 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
17	REF 0618 .100	- полир копьевидный большой серый RA – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
18	REF 6700.006	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый HP – 2 шт., - полир цилиндрический закругленный зеленый лаймовый HP – 2 шт., - полир копьевидный большой серый HP – 1 шт., - полир цилиндрический закругленный серый HP – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
19	REF 6715.006	- полир копьевидный зеленый лаймовый HP – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

20	REF 6715.012	- полир копьевидный зеленый лаймовый НР – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 6715.025	- полир копьевидный зеленый лаймовый НР – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 6715.100	- полир копьевидный зеленый лаймовый НР– 100 шт. - инструкция-вкладыш	1900 шт.
23	REF 6720.006	- полир цилиндрический закругленный зеленый лаймовый НР – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 6720.012	- полир цилиндрический закругленный зеленый лаймовый НР – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 6720.025	- полир цилиндрический закругленный зеленый лаймовый НР – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 6720.100	- полир цилиндрический закругленный зеленый лаймовый НР – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 6815.006	- полир копьевидный серый НР – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 6815.012	- полир копьевидный серый НР – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 6815.025	- полир копьевидный серый НР – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 6815.100	- полир копьевидный серый НР – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 6820.006	- полир цилиндрический закругленный серый НР – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 6820.012	- полир цилиндрический закругленный серый НР – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 6820.025	- полир цилиндрический закругленный серый НР – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 6820.100	- полир цилиндрический закругленный серый НР – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.14. XIV. Набор KENDA AMALGAM:

REF 700.012A, REF 700.012, REF 2001.006, REF 2001.012, REF 2001.025, REF 2001.100, REF 2002.006, REF 2002.012, REF 2002.025, REF 2002.100, REF 2003.006, REF 2003.012, REF 2003.025, REF 2003.100, REF 2004.006, REF 2004.012, REF 2004.025, REF 2004.100, REF 2005.006, REF 2005.012, REF 2005.025, REF 2005.100, REF 2006.006, REF 2006.012, REF 2006.025, REF 2006.100, REF 2007.006, REF 2007.012, REF 2007.025, REF 2007.100, REF 2008.006, REF 2008.012, REF 2008.025, REF 2008.100, REF 3001.006, REF 3001.012, REF 3001.025, REF 3001.100, REF 3002.006, REF 3002.012, REF 3002.025, REF 3002.100, REF 3003.006, REF 3003.012, REF 3003.025, REF 3003.100, REF 3004.006, REF 3004.012, REF 3004.025, REF 3004.100, REF 3005.006, REF 3005.012, REF 3005.025, REF 3005.100, REF 3006.006, REF 3006.012, REF 3006.025, REF 3006.100, REF 3007.006, REF 3007.012, REF 3007.025, REF 3007.100, REF 3008.006, REF 3008.012, REF 3008.025, REF 3008.100.

14.14.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Наборы полиров для обработки амальгамы и драгоценных металлов. Головка полиров содержит один вид абразива – карбид кремния двух видов зернистости - средней и мелкой. Двухшаговая обработка. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.14.2. Комплект поставки KENDA AMALGAM:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Пламевидный большой	5,5 ±0,5	13 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22,8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм
	Пламевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22,8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм

	Ножевидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22.8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22.8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22.8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22.8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22.8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	средний 75 – 22.8	коричневый	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Пламеви- д- ный большой	5.5 ±0,5	13 ±0,5	1,1 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Пламевидны й малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Ножевидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Грушевидный	3,3 ±0,5	5,8 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	Мелкие 8 – 3	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

14.14.3. Комплект поставки KENDA AMALGAM:

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе

1	REF 0700.012A	- полир ножевидный коричневый – 1 шт., - полир чашевидный средний коричневый – 2 шт., - полир копьевидный малый коричневый – 2 шт., - полир копьевидный большой коричневый – 1 шт. - полир ножевидный зеленый – 1 шт., - полир чашевидный средний зеленый – 2 шт., - полир копьевидный малый зеленый – 2 шт., - полир копьевидный большой зеленый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 700.012	- полир пламевидный большой коричневый – 1 шт., - полир пламевидный малый коричневый – 1 шт., - полир ножевидный коричневый – 1 шт., - полир чашевидный малый коричневый – 1 шт., - полир чашевидный средний коричневый – 1 шт., - полир копьевидный малый коричневый – 1 шт., - полир пламевидный большой зеленый – 1 шт., - полир пламевидный малый зеленый – 1 шт., - полир ножевидный зеленый – 1 шт., - полир чашевидный малый зеленый – 1 шт., - полир чашевидный средний зеленый – 1 шт., - полир копьевидный малый зеленый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 2001.006	- полир пламевидный большой коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 2001.012	- полир пламевидный большой коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 2001.025	- полир пламевидный большой коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 2001.100	- полир пламевидный большой коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 2002.006	- полир пламевидный малый коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 2002.012	- полир пламевидный малый коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 2002.025	- полир пламевидный малый коричневый – 25 шт.	25 шт.

		- инструкция-вкладыш	
10	REF 2002.100	- полир пламевидный малый коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 2003.006	- полир ножевидный коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 2003.012	- полир ножевидный коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 2003.025	- полир ножевидный коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 2003.100	- полир ножевидный коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 2004.006	- полир чашевидный малый коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 2004.012	- полир чашевидный малый коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 2004.025	- полир чашевидный малый коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 2004.100	- полир чашевидный малый коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 2005.006	- полир чашевидный средний коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 2005.012	- полир чашевидный средний коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 2005.025	- полир чашевидный средний коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 2005.100	- полир чашевидный средний коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 2006.006	- полир копьевидный малый коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 2006.012	- полир копьевидный малый коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 2006.025	- полир копьевидный малый коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 2006.100	- полир копьевидный малый коричневый – 100 шт.	100 шт.

		- инструкция-вкладыш	
27	REF 2007.006	- полир грушевидный коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 2007.012	- полир грушевидный коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	21 шт.
29	REF 2007.025	- полир грушевидный коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 2007.100	- полир грушевидный коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 2008.006	- полир копьевидный большой коричневый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 2008.012	- полир копьевидный большой коричневый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 2008.025	- полир копьевидный большой коричневый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 2008.100	- полир копьевидный большой коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 3001.006	- полир пламевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
36	REF 3001.012	- полир пламевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
37	REF 3001.025	- полир пламевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
38	REF 3001.100	- полир пламевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
39	REF 3002.006	- полир пламевидный малый зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
40	REF 3002.012	- полир пламевидный малый зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
41	REF 3002.025	- полир пламевидный малый зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
42	REF 3002.100	- полир пламевидный малый зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
43	REF 3003.006	- полир ножевидный зеленый – 6 шт.	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
44	REF 3003.012	- полир ножевидный зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
45	REF 3003.025	- полир ножевидный зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
46	REF 3003.100	- полир ножевидный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
47	REF 3004.006	- полир чашевидный малый зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
48	REF 3004.012	- полир чашевидный малый зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
49	REF 3004.025	- полир чашевидный малый зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
50	REF 3004.100	- полир чашевидный малый зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
51	REF 3005.006	- полир чашевидный средний зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
52	REF 3005.012	- полир чашевидный средний зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
53	REF 3005.025	- полир чашевидный средний зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
54	REF 3005.100	- полир чашевидный средний зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
55	REF 3006.006	- полир копьевидный малый зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
56	REF 3006.012	- полир копьевидный малый зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
57	REF 3006.025	- полир копьевидный малый зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
58	REF 3006.100	- полир копьевидный малый зеленый – 100шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
59	REF 3007.006	- полир грушевидный зеленый - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
60	REF 3007.012	- полир грушевидный зеленый - 12 шт.	12 шт.

		- инструкция-вкладыш	
61	REF 3007.025	- полир грушевидный зеленый - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
62	REF 3007.100	- полир грушевидный зеленый - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
63	REF 3008.006	- полир копьевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
64	REF 3008.012	- полир копьевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
65	REF 3008.025	- полир копьевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
66	REF 3008.100	- полир копьевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 15. XV. Набор KENDA PRECIOUS METALS:

REF 740.012A, REF 740.012, REF 1004.006, REF 1004.012, REF 1004.025, REF 1004.100, REF 1005.006, REF 1005.012, REF 1005.025, REF 1005.100, REF 1006.006, REF 1006.012, REF 1006.025, REF 1006.100, REF 1008.006, REF 1008.012, REF 1008.025, REF 1008.100, REF 1009.006, REF 1009.012, REF 1009.025, REF 1009.100, REF 1010.006, REF 1010.012, REF 1010.025, REF 1010.100, REF 1104.006, REF 1104.012, REF 1104.025, REF 1104.100, REF 1105.006, REF 1105.012, REF 1105.025, REF 1105.100, REF 1106.006, REF 1106.012, REF 1106.025, REF 1106.100, REF 1108.006, REF 1108.012, REF 1108.025, REF 1108.100, REF 1109.006, REF 1109.012, REF 1109.025, REF 1109.100, REF 1110.006, REF 1110.012, REF 1110.025, REF 1110.100, REF 741.006 HP, REF 1006.006 HP, REF 1006.012 HP, REF 1006.025 HP, REF 1006.100 HP, REF 1008.006 HP, REF 1008.012 HP, REF 1008.025 HP, REF 1008.100 HP, REF 1014.006 HP, REF 1014.012 HP, REF 1014.025 HP, REF 1014.100 HP, REF 1106.006 HP, REF 1106.012 HP, REF 1106.025 HP, REF 1106.100 HP, REF 1108.006 HP, REF 1108.012 HP, REF 1108.025 HP, REF 1108.100 HP, REF 1114.006 HP, REF 1114.012 HP, REF 1114.025 HP, REF 1114.100 HP.

14.15.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Полиры с хвостовиком для углового и прямого наконечника. Для двухшаговой полировки - содержат два вида абразивных частиц – карбид кремния средней зернистости и алмазные частицы сверхмелкой зернистости. Рекомендованы для обработки: драгоценных и полудрагоценных металлов, титановых и кобальт-хромовых сплавов. Наборы для углового наконечника требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед

первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования. Наборы для прямого наконечника используются в зуботехнических лабораториях и не требуют стерилизации.

14.15.2. Технические характеристики KENDA PRECIOUS METALS:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/стержень/совместимость с наконечником
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,8 ±0,2	карбид кремния	средний 150 - 63	черный	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	средний 150 - 63	черный	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	карбид кремния	средний 150 - 63	черный	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	средний 150 - 63	черный	0,3 - 2	7'500 – 10'000	

	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	0,9 ±0,2	карбид кремния	средний 150 - 63	черный	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,0 ±0,2	карбид кремния	средний 150 - 63	черный	0,3 - 2	7'500 – 10'000
	Чашевидный малый	5 ±0,5	8 ±0,5	0,9 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Чашевидный средний	6,5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	0,7 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	дисковидный	10 ±0,5	5,5 ±0,5	1,0 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,2 ±0,2	алмаз	тончайшая 8 - 4	зеленый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	
Внешний вид полира	Форма Полироваль- ной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуем оу усилие (Н)	Рекомендуем ая (об./м)	Хвостовик/ стержень/сов- местимость с наконечником
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Карбид кремния	средняя 150 – 63	черный	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ± 2 мм

	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,6 ±0,2	Карбид кремния	средняя 150 – 63	Черный	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,8 ± 2 мм
	дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,8 ±0,2	Карбид кремния	средняя 150 – 63	Черный	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ± 2 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Алмаз	сверхмелкая 8 – 4	Зеленый	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ± 2 мм
	Копьевидный большой	5 ±0,5	10 ±0,5	1,6 ±0,2	Алмаз	сверхмелкая 8 – 4	Зеленый	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,8 ± 2 мм

	дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,8 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 – 4	Зеленый	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимной части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ± 2 мм
--	-------------	------------	-------------	-------------	-------	----------------------	---------	---------	---------------	--

14.15.3. Комплект поставки KENDA PRECIOS METALS:

N	REF	состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 740.012A	- полир чашевидный средний черный – 2 шт., - полир копьевидный малый черный – 2 шт., - полир копьевидный большой черный – 1 шт., - полир дисковидный черный – 1 шт., - полир чашевидный средний зеленый – 2 шт., - полир копьевидный малый зеленый – 2 шт., - полир копьевидный большой зеленый – 1 шт., - полир дисковидный зеленый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
2	REF 740.012	- полир чашевидный малый черный – 1 шт., - полир чашевидный средний черный – 1 шт., - полир копьевидный малый черный – 1 шт., - полир копьевидный большой черный – 1 шт., - полир дисковидный черный – 1 шт., - полир чашевидный большой черный – 1 шт., - полир чашевидный малый зеленый – 1 шт., - полир чашевидный средний зеленый – 1 шт., - полир копьевидный малый зеленый – 1 шт., - полир копьевидный большой зеленый – 1 шт., - полир дисковидный зеленый – 1 шт.,	12 шт.

		- полир чашевидный большой зеленый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	
3	REF 1004.006	- полир чашевидный малый черный – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
4	REF 1004.012	- полир чашевидный малый черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
5	REF 1004.025	- полир чашевидный малый черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
6	REF 1004.100	- полир чашевидный малый черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
7	REF 1005.006	- полир чашевидный средний черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
8	REF 1005.012	- полир чашевидный средний черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
9	REF 1005.025	- полир чашевидный средний черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
10	REF 1005.100	- полир чашевидный средний черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 1006.006	- полир копьевидный малый черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
12	REF 1006.012	- полир копьевидный малый черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
13	REF 1006.025	- полир копьевидный малый черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
14	REF 1006.100	- полир копьевидный малый черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 1008.006	- полир копьевидный большой черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
16	REF 1008.012	- полир копьевидный большой черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
17	REF 1008.025	- полир копьевидный большой черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
18	REF 1008.100	- полир копьевидный большой черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

19	REF 1009.006	- полир дисковидный черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
20	REF 1009.012	- полир дисковидный черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
21	REF 1009.025	- полир дисковидный черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
22	REF 1009.100	- полир дисковидный черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 1010.006	- полир чашевидный большой черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
24	REF 1010.012	- полир чашевидный большой черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
25	REF 1010.025	- полир чашевидный большой черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
26	REF 1010.100	- полир чашевидный большой черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 1104.006	- полир чашевидный малый зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
28	REF 1104.012	- полир чашевидный малый зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
29	REF 1104.025	- полир чашевидный малый зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
30	REF 1104.100	- полир чашевидный малый зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 1105.006	- полир чашевидный средний зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
32	REF 1105.012	- полир чашевидный средний зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
33	REF 1105.025	- полир чашевидный средний зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
34	REF 1105.100	- полир чашевидный средний зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 1106.006	- полир копьевидный малый зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

36	REF 1106.012	- полир копьевидный малый зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
37	REF 1106.025	- полир копьевидный малый зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
38	REF 1106.100	- полир копьевидный малый зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
39	REF 1108.006	- полир копьевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
40	REF 1108.012	- полир копьевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
41	REF 1108.025	- полир копьевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
42	REF 1108.100	- полир копьевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
43	REF 1109.006	- полир дисковидный зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
44	REF 1109.012	- полир дисковидный зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
45	REF 1109.025	- полир дисковидный зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
46	REF 1109.025	- полир дисковидный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
47	REF 1110.006	- полир чашевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
48	REF 1110.012	- полир чашевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
49	REF 1110.025	- полир чашевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
50	REF 1110.100	- полир чашевидный большой зеленый – 100 шт.	100 шт..

		- инструкция-вкладыш	
--	--	----------------------	--

51	REF 741.006 HP	- полир копьевидный малый черный – 1 шт., - полир копьевидный большой черный – 1 шт., - полир дисковидный черный – 1 шт., - полир копьевидный малый зеленый – 1 шт., - полир копьевидный большой зеленый – 1 шт., - полир дисковидный зеленый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
52	REF 1006.006 HP	- полир копьевидный малый черный – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
53	REF 1006.012 HP	- полир копьевидный малый черный – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
54	REF 1006.025 HP	- полир копьевидный малый черный – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
55	REF 1006.100 HP	- полир копьевидный малый черный – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
56	REF 1008.006 HP	- полир копьевидный большой черный – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
57	REF 1008.012 HP	- полир копьевидный большой черный – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
58	REF 1008.025 HP	- полир копьевидный большой черный – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
59	REF 1008.100 HP	- полир копьевидный большой черный – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
60	REF 1014.006 HP	- полир дисковидный черный – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
61	REF 1014.012 HP	- полир дисковидный черный – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
62	REF 1014.025 HP	- полир дисковидный черный – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
63	REF 1014.100 HP	- полир дисковидный черный – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
64	REF 1106.006 HP	- полир копьевидный малый зеленый – 6 шт.,	6 шт.

		- инструкция-вкладыш	
65	REF 1106.012 HP	- полир копьевидный малый зеленый – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
66	REF 1106.025 HP	- полир копьевидный малый зеленый – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
67	REF 1106.100 HP	- полир копьевидный малый зеленый – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
68	REF 1108.006 HP	- полир копьевидный большой зеленый – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
69	REF 1108.006 HP	- полир копьевидный большой зеленый – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
70	REF 1108.006 HP	- полир копьевидный большой зеленый – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
71	REF 1108.006 HP	- полир копьевидный большой зеленый – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
72	REF 1114.006 HP	- полир дисковидный зеленый – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
73	REF 1114.012 HP	- полир дисковидный зеленый – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
74	REF 1114.025 HP	- полир дисковидный зеленый – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
75	REF 1114.100 HP	- полир дисковидный зеленый – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.

14. 16. XVI. Набор KENDA FG SERIES:

REF 4006.005 FG, REF 5006.005 FG, REF 0306.005 FG, REF 0386.005 FG, REF 2006.005 FG, REF 3006.005 FG.

14.16.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Наборы полиров с тремя типами абразива - карбида кремния, оксида алюминия и алмазной крошки для турбинных стоматологических наконечников. Рекомендованы для обработки композитов, керамики, амальгамы, драгоценных металлов. Требуют очистки, дезинфекции и стерилизации перед первым применением и вторичной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.16.2. Технические характеристики KENDA FG SERIES:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	6,75 ±0,5	0,3 ±0,1	Оксид алюминия	средняя 75 – 22.8	Желтый	0,3 - 2	20'000	Тип 3 (для турбинных FG) Минимальная длина (зажимаемой части) 9,00 мм Длина стержня 13,0 ±0,6 мм
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	6,75 ±0,5	0,3 ±0,1	Оксид алюминия	ультрамелкая 8 – 3	Голубой	0,3 – 2	10'000	
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	6,75 ±0,5	0,3 ±0,1	алмаз	мелкая 8-32	Фиолетовый	0,3 – 2	20'000	
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	6,75 ±0,5	0,3 ±0,1	Алмаз	Сверхмелкая 8 – 4	Светло-бежевый	0,3 – 2	10'000	

	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	6,75 ±0,5	0,3 ±0,1	Карбид кремния	средняя 75 – 22.8	коричневый	0,3 – 2	20'000
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	6,75 ±0,5	0,3 ±0,1	Карбид кремния	мелкая 8 – 32	зеленый	0,3 – 2	10'000

14.16.3. Состав наборов KENDA FG SERIES:

N	REF	состав	Общее число полиров наборе в
1	REF 4006.005 FG	- полир коповидный малый желтый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	5 шт.
2	REF 5006.005 FG	- полир коповидный малый голубой – 5 шт. - инструкция-вкладыш	5 шт.
3	REF 0306.005 FG	- полир коповидный малый фиолетовый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	5 шт.
4	REF 0386.005 FG	- полир коповидный малый светло-бежевый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	5 шт.
5	REF 2006.005 FG	- полир коповидный малый коричневый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	5 шт.
6	REF 3006.005	- полир коповидный малый зеленый – 5 шт. - инструкция-вкладыш	5 шт.

14.17. XVII. Набор KENDA Z-SERIES:

REF Z-000.006, REF Z-006.003, REF Z-014.003, REF Z-000.009, REF Z-010.003,
REF Z-006.C.003, REF Z-006.M.003, REF Z-006.F.003, REF Z-010.C.003, REF Z-010.M.003, REF Z-010.F.003, REF Z-014.C.003, REF Z-014.M.003,
REF Z-014.F.003.

14.17.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Алмазные полиры для прямого наконечника для трехшагового метода обработки особо прочной керамики, оксида циркония и пресс-керамики. Не требуют стерилизации, используются в зуботехнических лабораториях.

14.17.2. Технические характеристики KENDA Z-SERIES:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Алмаз	грубая 164 - 69	Фиолетовые	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2 мм
	Колесовидный	12 ±0,5	7,0 ±0,5	2,3 ±0,2	Алмаз	грубая 164 - 69	Фиолетовые	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	Дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,9 ±0,2	алмаз	грубая 164 - 69	Фиолетовые	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2мм
	Копьевидный Малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Алмаз	средняя 69 – 32	Бирюзовые	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2 мм

	Колесовидный	12 ±0,5	7,0 ±0,5	2,3 ±0,2	Алмаз	средняя 69 – 32	Бирюзовые	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	Дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,9 ±0,2	Алмаз	средняя 69 – 32	Бирюзовые	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	Копьевидный Малый	3,3 ±0,5	7,4 ±0,5	1,3 ±0,2	Алмаз	мелкая 32 – 8	Лаймовые	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 37,7 ±2 мм
	Колесовидный	12 ±0,5	7,0 ±0,5	2,0 ±0,2	Алмаз	мелкая 32 – 8	Лаймовые	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм
	Дисковидный	12 ±0,5	5,8 ±0,5	1,7 ±0,2	Алмаз	мелкая 32 – 8	Лаймовые	0,3 – 2	5'000 – 7'500	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 36,5 ±2 мм

14.17.3. Состав наборов KENDA Z- SERIES:

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF Z-000.006	- полир копьевидный малый фиолетовый – 1 шт., - полир дисковидный фиолетовый – 1 шт., - полир копьевидный малый бирюзовый – 1 шт., - полир дисковидный бирюзовый – 1 шт., - полир копьевидный малый лаймовый – 1 шт., - полир дисковидный лаймовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF Z-000.003	- полир копьевидный малый фиолетовый – 1 шт., - полир копьевидный малый бирюзовый – 1 шт., - полир копьевидный малый лаймовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
3	REF Z-014.003	- полир колесовидный фиолетовый – 1 шт., - полир колесовидный бирюзовый – 1 шт., - полир колесовидный лаймовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
4	REF Z-000.009	- полир копьевидный малый фиолетовый - 1 шт., - полир копьевидный малый бирюзовый – 1 шт., - полир копьевидный малый лаймовый – 1 шт., - полир колесовидный фиолетовый – 1 шт., - полир колесовидный бирюзовый – 1 шт., - полир колесовидный лаймовый – 1 шт., - полир дисковидный фиолетовый – 1 шт., - полир дисковидный бирюзовый – 1 шт., - полир дисковидный лаймовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	9 шт.
5	REF Z-010.003	- полир копьевидный малый фиолетовый – 1 шт., - полир копьевидный малый бирюзовый – 1 шт., - полир копьевидный малый лаймовый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
6	REF Z.006.C.003	- полир копьевидный малый фиолетовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.

7	REF Z.006.M.003	- полир копьевидный малый бирюзовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
8	REF Z.006.F.003	- полир копьевидный малый лаймовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
9	REF Z.010.C.003	- полир колесовидный фиолетовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
10	REF Z.010.M.003	- полир колесовидный бирюзовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
11	REF Z.010.F.003	- полир колесовидный лаймовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
12	REF Z.014.C.003	- полир дисковидный фиолетовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
13	REF Z.014.M.003	- полир дисковидный бирюзовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
14	REF Z.014.F.003	- полир дисковидный лаймовый - 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.

14. 18. XVIII. Набор KENDA HIGH END

REF 626.004, REF 626-C.001, REF 626-M.001, REF 626-F.001, REF 626-XF.001

14.18.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Набор полиров в виде дисков с четырьмя различными типами алмазной крошки для комплексной обработки пресс-керамики. Благодаря геометрической форме дисков обеспечивается лучший доступ в труднодоступных местах.

Рекомендован для удаления материала, выравнивания, финальной обработки и полировки пресс-керамики. Используется в зуботехнических лабораториях, не требует стерилизации.

14.18.2. Технические характеристики KENDA HIGH END

I. Набор KENDA HIGH END:

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
--------------------	-----------------------------	--	---------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------	--

	Дисковидный большой	26 ±0,5	2 ±0,5	3,9 ±0,2	алмаз	грубая 164 - 69	Фиолетовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 45,2 ±2 мм
	Дисковидный большой	26 ±0,5	2 ±0,5	3,8 ±0,2	алмаз	средняя 69 – 32	Розовый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Дисковидный большой	26 ±0,5	2 ±0,5	3,7 ±0,2	алмаз	мелкая 32 – 8	Зеленый	0,3 - 2	7'500 – 10'000	
	Дисковидный большой	26 ±0,5	2 ±0,5	3,4 ±0,2	алмаз	сверхмелкая 8 - 4	серый	0,3 - 2	5'000 – 7'500	

14.18.3. Состав наборов KENDA HIGH END:

N	REF	Состав	Общее число полиров наборе в
1	REF 626.004	- полир дисковидный большой фиолетовый – 1 шт., - полир дисковидный большой розовый – 1 шт., - полир дисковидный большой зеленый – 1 шт.,	4 шт.

		- полир дисковидный большой серый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	
2	REF 626-C.001	- полир дисковидный большой фиолетовый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	1 шт.
3	REF 626-M.001	- полир дисковидный большой розовый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	1 шт.
4	REF 626-F.001	- полир дисковидный большой зеленый – 1 шт., - инструкция-вкладыш	1 шт.
5	REF 626-XF.001	- полир дисковидный большой серый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	1 шт.

14. 19. XIX. Набор KENDA WHEEL&KNIFE

REF 6522.R.010, REF 6522.R.100, REF 6517.R.010, REF 6517.R.100, REF 6522.L.010, REF 6522.L.100, REF 7522.R.010, REF 7522.R.100, REF 7517.R.010, REF 7517.R.100, REF 7522.L.010, REF 7522.L.100, REF 1522.R.010, REF 1522.R.100, REF 1517.R.010, REF 1517.R.100, REF 1522.L.010, REF 1522.L.100, REF 2522.R.010, REF 2522.R.100, REF 2517.R.010, REF 2517.R.100, REF 2522.L.010, REF 2522.L.100, REF 3522.R.010, REF 3522.R.100, REF 3517.R.010, REF 3517.R.100, REF 3522.L.010, REF 3522.L.100, REF 9522.R.010, REF 9522.R.100, REF 9517.R.010, REF 9517.R.100, REF 9522.L.010, REF 9522.L.100.

14.19.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Полиры без хвостовика в форме дисков для зуботехнических лабораторий (колесовидные и ножевидные), представлены тремя типами абразива с частицами из карбида кремния крупной, средней и мелкой зернистости. Рекомендованы для шлифовки и выравнивания поверхностей из керамики и титана. Не подвергаются стерилизации перед применением.

Совместимы с дискодержателями Набора KENDA дискодержатели. Для совмещения следует раскрутить винт дискодержателя, вставить винт в отверстие полира и закрутить винт с полиром до упора в нарезное отверстие дискодержателя.

14.19.2. Технические характеристики KENDA WHEEL & KNIFE

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
--------------------	-----------------------------	--	---------------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------	--

	Колесовидный большой	22 ±0,5	3 ±0,5	2,6 ±0,4	Карбид кремния	Крупная зернистость 150 - 63	Светло-серый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	Колесовидный малый	17 ±0,5	3 ±0,5	1,3 ±0,4	Карбид кремния	Крупная зернистость 150 - 63	Светло-серый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	ножевидный	22 ±0,5	3 ±0,5	1,5 ±0,4	Карбид кремния	Крупная зернистость 150 - 63	Светло-серый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	Колесовидный большой	22 ±0,5	3 ±0,5	2,6 ±0,4	Карбид кремния	75 – 22.8	Бледно- розовые	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика
	Колесовидный малый	17 ±0,5	3 ±0,5	1,3 ±0,4	Карбид кремния	Мелкая зернистость 75 – 22.8	Бледно- розовые	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика

	ножевидный	22 ±0,5	3 ±0,5	1,5 ±0,4	Карбид кремния	Мелкая зернистость 75 – 22.8	Бледно- розовые	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика
	Колесовидны й большой	22 ±0,5	3 ±0,5	2,4 ±0,4	Карбид кремния	Средняя зернистость 150 - 63	черные	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	Колесовидны й малый	17 ±0,5	3 ±0,5	1,3 ±0,4	Карбид кремния	Средняя зернистость 150 - 63	черные	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	ножевидный	22 ±0,5	3 ±0,5	1,5 ±0,4	Карбид кремния	Средняя зернистость 150 - 63	черные	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	Колесовидны й большой	22 ±0,5	3 ±0,5	4,1 ±0,4	Карбид кремния	мелкая 75 – 22.8	коричневый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика

	Колесовидный малый	17 ±0,5	3 ±0,5	3,1 ±0,4	Карбид кремния	мелкая 75 – 22.8	коричневый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	ножевидный	22 ±0,5	3 ±0,5	3,3 ±0,4	Карбид кремния	мелкая 75 – 22.8	коричневый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	Колесовидный большой	22 ±0,5	3 ±0,5	4,1 ±0,4	Карбид кремния	сверхмелкая 8 – 3	зеленый	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика
	Колесовидный малый	17 ±0,5	3 ±0,5	3,0 ±0,4	Карбид кремния	сверхмелкая 8 – 3	зеленый	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика
	ножевидный	22 ±0,5	3 ±0,5	3,3 ±0,4	Карбид кремния	сверхмелкая 8 – 3	зеленый	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика

	Колесовидный большой	22 ±0,5	3 ±0,5	4,0 ±0,4	Карбид кремния	Грубая зернистость 150 - 63	оливковый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	Колесовидный малый	17 ±0,5	3 ±0,5	3,1 ±0,4	Карбид кремния	Грубая зернистость 150 - 63	оливковый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика
	ножевидный	22 ±0,5	3 ±0,5	3,4 ±0,4	Карбид кремния	Грубая зернистость 150 - 63	оливковый	0,3 – 2	20'000	Без хвостовика

14.19.3. Состав наборов KENDA WHEEL & KNIFE

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 6522.R.010	- полир колесовидный большой светло-серый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
2	REF 6522.R.100	- полир колесовидный большой светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
3	REF 6517.R.010	- полир колесовидный малый светло-серый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
4	REF 6517.R.100	- полир колесовидный малый светло-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
5	REF 6522.L.010	- полир ножевидный светло-серый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.

6	REF 6522.L.100	- полир ножевидный светло-серый – 100 шт.	100 шт.
7	REF 7522.R.010	- полир колесовидный большой бледно-розовый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
8	REF 7522.R.100	- полир колесовидный большой бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
9	REF 7517.R.010	- полир колесовидный малый бледно-розовый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
10	REF 7517.R.100	- полир колесовидный малый бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
11	REF 7522.L.010	- полир ножевидный бледно-розовый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
12	REF 7522.L.100	- полир ножевидный бледно-розовый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
13	REF 1522.R.010	- полир колесовидный большой черный – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
14	REF 1522.R.100	- полир колесовидный большой черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 1517.R.010	- полир колесовидный малый черный – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
16	REF 1517.R.100	- полир колесовидный малый черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
17	REF 1522.L.010	- полир ножевидный черный – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
18	REF 1522.L.100	- полир ножевидный черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
19	REF 2522.R.010	- полир колесовидный большой коричневый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
20	REF 2522.R.100	- полир колесовидный большой коричневый – 100 шт.	100 шт.
21	REF 2517.R.010	- полир колесовидный малый коричневый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
22	REF 2517.R.100	- полир колесовидный малый коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
23	REF 2522.L.010	- полир ножевидный коричневый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.

24	REF 2522.L.100	- полир ножевидный коричневый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
25	REF 3522.R.010	- полир колесовидный большой зеленый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
26	REF 3522.R.100	- полир колесовидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
27	REF 3517.R.010	- полир колесовидный малый зелкный – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
28	REF 3517.R.100	- полир колесовидный малый зелкный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
29	REF 3522.L.010	- полир ножевидный зеленый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
30	REF 3522.L.100	- полир ножевидный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
31	REF 9522.R.010	- полир колесовидный большой оливковый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
32	REF 9522.R.100	- полир колесовидный большой оливковый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
33	REF 9517.R.010	- полир колесовидный малый оливковый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
34	REF 9517.R.100	- полир колесовидный малый оливковый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
35	REF 9522.L.010	- полир ножевидный оливковый – 10 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
36	REF 9522.L.100	- полир ножевидный оливковый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.20. XX. Набор KENDA QUEEN:

REF 9008.006, REF 9008.012, REF 9008.025, REF 9008.100, REF 9009.006, REF 9009.012, REF 9009.025, REF 9009.100, REF 9010.006, REF 9010.012, REF 9010.025, REF 9010.100, REF 9011.006, REF 9011.012, REF 9011.025, REF 9011.100, REF 9012.006, REF 9012.012, REF 9012.025, REF 9012.100, REF 9013.006, REF 9013.012, REF 9013.025, REF 9013.100, REF 9014.006, REF 9014.012, REF 9014.025, REF 9014.100, REF 9015.006, REF 9015.012, REF 9015.025, REF 9015.100, REF 9016.006, REF 9016.012, REF 9016.025, REF 9016.100, REF 7008.006, REF 7008.012, REF 7008.025, REF 7008.100, REF 7009.006, REF 7009.012, REF 7009.025, REF 7009.100, REF 7010.006, REF 7010.012, REF 7010.025, REF 7010.100, REF 7011.006, REF 7011.012, REF 7011.025, REF 7011.100, REF 7012.006, REF 7012.012, REF 7012.025, REF 7012.100, REF 7013.006,

REF 7013.012, REF 7013.025, REF 7013.100, REF 7014.006, REF 7014.012, REF 7014.025, REF 7014.100, REF 7015.006, REF 7015.012, REF 7015.025, REF 7015.100, REF 7016.006, REF 7016.012, REF 7016.025, REF 7016.100.

14.20.1. Краткое описание, функциональные характеристики:

Наборы полиров для акриловых протезов для зуботехнических лабораторий. Не подлежат стерилизации. Рекомендованы для контурирования частичных и полных протезов, а также стоматологических и ортодонтических конструкций. Представлен полирами различной формы с двумя типами абразивных частичек из карбида кремния.

14.20.2. Технические характеристики KENDA QUEEN

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный большой	12,5 ±0,5	22 ±0,5	6,3 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм
	Цилиндрический малый закругленный	12,5 ±0,5	15 ±0,5	5,3 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм
	Цилиндрический закругленный угловой	12,3 ±0,5	16 ±0,5	5,5 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм

	Цилиндрический закругленный большой	15 ±0,5	18 ±0,5	8,5 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2мм
	Цилиндрический угловой	15,2 ±0,5	17,5 ±0,5	7,8 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм
	цилиндрический	8,7 ±0,5	18 ±0,5	4,3 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3,0 ±1,5 мм
	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,4 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Копьевидный малый	10 ±0,5	18 ±0,5	4,0 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм

	Копьевидный закругленный	6,6 ±0,5	17 ±0,5	2,3 ±1,0	Карбид кремния	крупная >150	зеленый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Копьевидный большой	12,5 ±0,5	22 ±0,5	5,9 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм
	Цилиндричес кий малый закругленный	12,5 ±0,5	15 ±0,5	5,0 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2мм
	Цилиндричес кий закругленный угловой	12,3 ±0,5	16 ±0,5	5,1 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм
	Цилиндричес кий закругленный большой	15 ±0,5	18 ±0,5	7,8 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм

	Цилиндрический угловой	15,2 ±0,5	17,5 ±0,5	7,2 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±2 мм
	цилиндрический	8,7 ±0,5	18 ±0,5	4,1 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	4,4 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Копьевидный малый	10 ±0,5	18 ±0,5	3,1 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Копьевидный закругленный	6,6 ±0,5	17 ±0,5	2,2 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 - 63	черный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм

14.20.3. Состав наборов KENDA QUEEN

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 9008.006	- полир копьевидный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 9008.012	- полир копьевидный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 9008.025	- полир копьевидный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
4	REF 9008.100	- полир копьевидный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
5	REF 9009.006	- полир цилиндрический малый закругленный зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
6	REF 9009.012	- полир цилиндрический малый закругленный зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
7	REF 9009.025	- полир цилиндрический малый закругленный зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
8	REF 9009.100	- полир цилиндрический малый закругленный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
9	REF 9010.006	- полир цилиндрический закругленный угловой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
10	REF 9010.012	- полир цилиндрический закругленный угловой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
11	REF 9010.025	- полир цилиндрический закругленный угловой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
12	REF 9010.100	- полир цилиндрический закругленный угловой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
13	REF 9011.006	- полир цилиндрический закругленный большой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
14	REF 9011.012	- полир цилиндрический закругленный большой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
15	REF 9011.025	- полир цилиндрический закругленный большой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	10 шт.
16	REF 9011.100	- полир цилиндрический закругленный большой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

17	REF 9012.006	- полир цилиндрический угловой зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
18	REF 9012.012	- полир цилиндрический угловой зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
19	REF 9012.025	- полир цилиндрический угловой зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
20	REF 9012.100	- полир цилиндрический угловой зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
21	REF 9013.006	- полир цилиндрический зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
22	REF 9013.012	- полир цилиндрический зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
23	REF 9013.025	- полир цилиндрический зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
24	REF 9013.100	- полир цилиндрический зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
25	REF 9014.006	- полир цилиндрический закругленный удлиненный зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
26	REF 9014.012	- полир цилиндрический закругленный удлиненный зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
27	REF 9014.025	- полир цилиндрический закругленный удлиненный зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
28	REF 9014.100	- полир цилиндрический закругленный удлиненный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
29	REF 9015.006	- полир копьевидный малый зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
30	REF 9015.012	- полир копьевидный малый зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
31	REF 9015.025	- полир копьевидный малый зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
32	REF 9015.100	- полир копьевидный малый зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
33	REF 9016.006	- полир копьевидный закругленный зеленый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
34	REF 9016.012	- полир копьевидный закругленный зеленый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

35	REF 9016.025	- полир копьевидный закругленный зеленый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
36	REF 9016.100	- полир копьевидный закругленный зеленый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
37	REF 7008.006	- полир копьевидный большой черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
38	REF 7008.012	- полир копьевидный большой черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
39	REF 7008.025	- полир копьевидный большой черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
40	REF 7008.100	- полир копьевидный большой черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
41	REF 7009.006	- полир цилиндрический малый закругленный черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
42	REF 7009.012	- полир цилиндрический малый закругленный черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
43	REF 7009.025	- полир цилиндрический малый закругленный черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
44	REF 7009.100	- полир цилиндрический малый закругленный черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
45	REF 7010.006	- полир цилиндрический закругленный угловой черный - 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
46	REF 7010.012	- полир цилиндрический закругленный угловой черный - 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
47	REF 7010.025	- полир цилиндрический закругленный угловой черный - 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
48	REF 7010.100	- полир цилиндрический закругленный угловой черный - 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
49	REF 7011.006	- полир цилиндрический закругленный большой черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
50	REF 7011.012	- полир цилиндрический закругленный большой черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
51	REF 7011.025	- полир цилиндрический закругленный большой черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
52	REF 7011.100	- полир цилиндрический закругленный большой черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

53	REF 7012.006	- полир цилиндрический угловой черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
54	REF 7012.012	- полир цилиндрический угловой черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
55	REF 7012.025	- полир цилиндрический угловой черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
56	REF 7012.100	- полир цилиндрический угловой черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
57	REF 7013.006	- полир цилиндрический черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
58	REF 7013.012	- полир цилиндрический черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
59	REF 7013.025	- полир цилиндрический черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
60	REF 7013.100	- полир цилиндрический черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
61	REF 7014.006	- полир цилиндрический закругленный удлинебный черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
62	REF 7014.012	- полир цилиндрический закругленный удлинебный черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
63	REF 7014.025	- полир цилиндрический закругленный удлинебный черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
64	REF 7014.100	- полир цилиндрический закругленный удлинебный черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
65	REF 7015.006	- полир копьевидный малый черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
66	REF 7015.012	- полир копьевидный малый черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
67	REF 7015.025	- полир копьевидный малый черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
68	REF 7015.100	- полир копьевидный малый черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
69	REF 7016.005	- полир копьевидный закругленный черный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
70	REF 7016.012	- полир копьевидный закругленный черный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.

71	REF 7016.025	- полир копьевидный закругленный черный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
72	REF 7016.100	- полир копьевидный закругленный черный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.21. XXI. Набор KENDA ACRYLIC BLUE:

REF 8308.006, REF 8308.012, REF 8308.025, REF 8308.100, REF 8311.006, REF 8311.012, REF 8311.025, REF 8311.100, REF 8314.006, REF 8314.012, REF 8314.025, REF 8314.100, REF 8315.006, REF 8315.012, REF 8315.025, REF 8315.100, REF 8408.006, REF 8408.012, REF 8408.025, REF 8408.100, REF 8411.006, REF 8411.012, REF 8411.025, REF 8411.100, REF 8414.006, REF 8414.012, REF 8414.025, REF 8414.100, REF 8415.006, REF 8415.012, REF 8415.025, REF 8415.100, REF 8508.006, REF 8508.012, REF 8508.025, REF 8508.100, REF 8511.006, REF 8511.012, REF 8511.025, REF 8511.100, REF 8514.006, REF 8514.012, REF 8514.025, REF 8514.100, REF 8515.006, REF 8515.012, REF 8515.025, REF 8515.100.

14.21.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров для трехшаговой обработки с абразивом из оксида алюминия трех видов зернистости: грубой, средней и сверхмелкой (соответственно, синего, голубого и желтого цвета). Полиры синего цвета рекомендованы для подготовки и формования пластмассовых протезов, голубого цвета – для выравнивания, желтые – для заключительной полировки до блеска. Не требуется стерилизация. Для зуботехнических лабораторий.

14.21.2. Технические характеристики KENDA ACRYLIC BLUE

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный большой	12,5 ±0,5	22 ±0,5	6,4 ±1,0	Оксид алюминия	грубая >150	Синий	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0

	Цилиндрический закругленный	15 ±0,5	18 ±0,5	8,6 ±1,0	Оксид алюминия	грубая >150	синий	0,3 – 2	10'000 – 15'000	±1,5 мм
	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,5 ±1,0	Оксид алюминия	грубая >150	синий	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Копьевидный малый	10 ±0,5	18 ±0,5	4,0 ±1,0	Оксид алюминия	грубая >150	синий	0,3 – 2	10'000 – 15'000	
	Копьевидный малый	12,5 ±0,5	22 ±0,5	6,3 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 - 63	Голубой	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±1,5 мм
	Цилиндрический закругленный	15 ±0,5	18 ±0,5	8,4 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 - 63	голубой	0,3 – 2	10'000 – 15'000	

	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,4 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 - 63	голубой	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ±1,5 мм
	Копьевидный малый	10 ±0,5	18 ±0,5	3,9 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 - 63	голубой	0,3 – 2	10'000 – 15'000	
	Копьевидный малый	12,5 ±0,5	22 ±0,5	6,1 ±1,0	Оксид алюминия	сверхмелкая 12.8 – 6.5	желтый	0,3 – 2	5'000 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ±1,5 мм
	Цилиндрический закругленный	15 ±0,5	18 ±0,5	8,1 ±1,0	Оксид алюминия	сверхмелкая 12.8 – 6.5	желтый	0,3 – 2	5'000 – 10'000	
	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,3 ±1,0	Оксид алюминия	сверхмелкая 12.8 – 6.5	желтый	0,3 – 2	5'000 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3

	Копьевидный малый	10 ±0,5	18 ±0,5	3,9 ±1,0	Оксид алюминия	сверхмелкая 12.8 – 6.5	желтый	0,3 – 2	5'000 – 10'000	±1,5 мм
--	----------------------	------------	------------	-------------	-------------------	---------------------------	--------	---------	----------------	---------

14.21.3. Состав наборов KENDA ACRYLIC BLUE

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 8308.006	- полир коповидный большой синий – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 8308.012	- полир коповидный большой синий – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF 8308.025	- полир коповидный большой синий – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
4	REF 8308.100	- полир коповидный большой синий – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
5	REF 8311.006	- полир цилиндрический закругленный синий – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
6	REF 8311.012	- полир цилиндрический закругленный синий – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
7	REF 8311.025	- полир цилиндрический закругленный синий – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
8	REF 8311.100	- полир цилиндрический закругленный синий – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
9	REF 8314.006	- полир цилиндрический закругленный удлиненный синий – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
10	REF 8314.012	- полир цилиндрический закругленный удлиненный синий – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
11	REF 8314.025	- полир цилиндрический закругленный удлиненный синий – 25 шт.	25 шт.

		- инструкция-вкладыш	
12	REF 8314.100	- полир цилиндрический закругленный удлиненный синий– 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
13	REF 8315.006	- полир копьевидный малый синий – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
14	REF 8315.012	- полир копьевидный малый синий – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
15	REF 8315.025	- полир копьевидный малый синий – 25 шт. - инструкция-вкладыш	24 шт.
16	REF 8315.100	- полир копьевидный малый синий – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

17	REF 8408.006	- полир копьевидный большой голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
18	REF 8408.012	- полир копьевидный большой голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
19	REF 8408.025	- полир копьевидный большой голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
20	REF 8408.100	- полир копьевидный большой голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
21	REF 8411.006	- полир цилиндрический закругленный голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
22	REF 8411.012	- полир цилиндрический закругленный голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
23	REF 8411.025	- полир цилиндрический закругленный голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
24	REF 8411.100	- полир цилиндрический закругленный голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
25	REF 8414.006	- полир цилиндрический закругленный удлиненный голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
26	REF 8414.012	- полир цилиндрический закругленный удлиненный голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	123 шт.
27	REF 8414.025	- полир цилиндрический закругленный удлиненный голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
28	REF 8414.100	- полир цилиндрический закругленный удлиненный голубой– 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

29	REF 8415.006	- полир копьевидный малый голубой – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
30	REF 8415.012	- полир копьевидный малый голубой – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
31	REF 8415.025	- полир копьевидный малый голубой – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
32	REF 8415.100	- полир копьевидный малый голубой – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

33	REF 8508.006	- полир копьевидный большой желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
34	REF 8508.012	- полир копьевидный большой желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
35	REF 8508.025	- полир копьевидный большой желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
36	REF 8508.100	- полир копьевидный большой желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
37	REF 8511.006	- полир цилиндрический закругленный желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
38	REF 8511.012	- полир цилиндрический закругленный желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
39	REF 8511.025	- полир цилиндрический закругленный желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
40	REF 8511.100	- полир цилиндрический закругленный желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
41	REF 8514.006	- полир цилиндрический закругленный удлиненный желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
42	REF 8514.012	- полир цилиндрический закругленный удлиненный желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
43	REF 8514.025	- полир цилиндрический закругленный удлиненный желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
44	REF 8514.100	- полир цилиндрический закругленный удлиненный желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
45	REF 8515.006	- полир копьевидный малый желтый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

46	REF 8515.012	- полир копьевидный малый желтый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
47	REF 8515.025	- полир копьевидный малый желтый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
48	REF 8515.100	- полир копьевидный малый желтый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.22. XXII. Набор KENDA RED:

REF RED.8.006, REF RED.8.012, REF RED.8.025, REF RED.8.100, REF RED.14.006, REF RED.14.012, REF RED.14.025, REF RED.14.100, REF 10008.006, REF 10008.012, REF 10008.025, REF 10008.100, REF 10014.006, REF 10014.012, REF 10014.025, REF 10014.100, REF 301.L.006, REF 301.L.100.

14.22.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы из полиров с хвостовиком, а также головок полировальных и веретенообразных держателей (мандрелей). Для одношаговой обработки. Головка полировальная имеет предварительно изготовленное отверстие для облегчения монтажа (соединения с мандрелью). Мандрель ввинчивается в отверстие в головке по часовой стрелке до упора. Изношенная головка может быть отвинчена и заменена на новую. Изношенность полировальной головки визуально определяет медицинский специалист.

Рекомендованы для отделки и полировки съемных, несъемных и эластичных протезов из хромкобальтовых сплавов без повреждения сплавов. Не требуется стерилизации перед применением. Для зуботехнических лабораторий.

14.22.2. Технические характеристики KENDA RED

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный большой	12,5 ±0,5	22 ±0,5	6,1 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 – 63	красный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ± 1,5 мм

	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,4 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 – 63	красный	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ± 1,5 мм
	Копьевидный большой	12,5 ±0,5	22 ±0,5	4,6 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 – 63	красный	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика
	Цилиндрический закругленный удлиненный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	4,7 ±1,0	Карбид кремния	средняя 150 – 63	красный	0,3 – 2	10'000	Без хвостовика
Мандрель										НР (прямой)
	Диаметр хвостовика 2,35 (+0 / -0.016) мм, тип 2. Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Общая длина 49 ± 2 мм Длина стержня 36 ± 2 мм Масса 1,6±0,05 г									

14.22.3. Состав набора KENDA RED:

N	REF	Состав	Общее число полиров в

			наборе
1	REF RED.8.006	- полир копьевидный большой красный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF RED.8.012	- полир копьевидный большой красный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
3	REF RED.8.025	- полир копьевидный большой красный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
4	REF RED.8.100	- полир копьевидный большой красный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
5	REF RED.14.006	- полир цилиндрический закругленный красный – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
6	REF RED.14.012	- полир цилиндрический закругленный красный – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
7	REF RED.14.025	- полир цилиндрический закругленный красный – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
8	REF RED.14.100	- полир цилиндрический закругленный красный – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
9	REF 10008.006	- полир копьевидный большой красный без хвостовика – 6 шт. - мандрель – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
10	REF 10008.012	- полир копьевидный большой красный без хвостовика – 12 шт. - мандрель – 1 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
11	REF 10008.025	- полир копьевидный большой красный без хвостовика – 25 шт. - мандрель – 1 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
12	REF 10008.100	- полир копьевидный большой красный без хвостовика – 100 шт. - мандрель – 2 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
13	REF 10014.006	- полир цилиндрический закругленный красный без хвостовика – 6 шт. - мандрель – 1 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
14	REF 10014.012	- полир цилиндрический закругленный красный без хвостовика – 12 шт. - мандрель – 1 шт.	12 шт.

		- инструкция-вкладыш	
15	REF 10014.025	- полир цилиндрический закругленный красный без хвостовика – 25 шт. - мандрель – 1 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
16	REF 10014.100	- полир цилиндрический закругленный красный без хвостовика – 100 шт. - мандрель – 2 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
17	REF 301.L006	- мандрель – 6 шт. - инструкция-вкладыш	-
18	REF 301.L100	- мандрель – 100 шт. - инструкция-вкладыш	-

14. 23. XXIII. Набор KENDA YELLOW LINE:

REF Y-000A, REF Y-000, REF Y-008.003, REF Y-014.003, REF Y-018.003, REF Y-019.003.

14.23.1. Краткое описание, функциональные характеристики: наборы для финишной полировки протезов. Одношаговая обработка. Цилиндрический закругленный вытянутый полир рекомендован для удаления вмятин (наминов). Закругленные края и большая площадь соприкосновения цилиндрического полира с обрабатываемой поверхностью позволяет выполнять выравнивание без бороздок и получать равномерную гладкую поверхность. Гибкий щеточкообразный полир рекомендован для чистки и полировки межзубных промежутков. Не требуется стерилизация перед применением. Для зуботехнических лабораторий.

14.23.2. Технические характеристики KENDA YELLOW LINE

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный большой	12,5 ±0,5	22 ±0,5	6,0 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 – 63	желтый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ± 2 мм

	цилиндрический	15 ±0,5	10 ±0,5	5,8 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 – 63	желтый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ± 2 мм
	Цилиндрический закругленный вытянутый	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,2 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 – 63	желтый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ± 1,5 мм
	щеточкообразный	19 ±0,5	0,5 ±0,5	1,8 ±1,0	Оксид алюминия	средняя 150 - 63	желтый	0,3 – 2	7'500 – 10'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 42,0 ± 2 мм

14.23.3.3 Состав KENDA YELLOW LINE

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF Y-000A	- полир копьевидный большой желтый – 1 шт. - полир цилиндрический закругленный вытянутый желтый - 1 шт., - полир щеточкообразный желтый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
2	REF Y-000	- полир цилиндрический желтый – 1 шт., - полир цилиндрический закругленный вытянутый желтый - 1 шт., - полир щеточкообразный желтый – 1 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
	REF Y-008.003	- полир копьевидный большой желтый – 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
3	REF Y-014.003	- полир цилиндрический закругленный вытянутый желтый – 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
4	REF Y-018.003	- полир цилиндрический желтый – 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.
5	REF Y-019.003	- полир щеточкообразный желтый – 3 шт. - инструкция-вкладыш	3 шт.

14.24. XXIV. Набор KENDA BESTFLEX:

REF 6500.006, REF 6508.006, REF 6508.012, REF 6508.025, REF 6508.100, REF 6514.006, REF 6514.012, REF 6514.025, REF 6514.100, REF 6516.006, REF 6516.012, REF 6516.025, REF 6516.100.

14.24.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров для одношаговой полировки любых видов эластичных пластиков. Содержат абразивные частицы из карбида кремния грубой зернистости. Не требует стерилизации перед применением. Для зуботехнических лабораторий.

14.24.2. Технические характеристики KENDA BESTFLEX

Внешний вид полира	Форма Полировальн ой головки	Диаметр головки в самой широкой	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуем оу усилие (Н)	Рекомендуем ая (об./м)	Хвостовик/ стержень/со вместимость с
-----------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	-----------------	---	-------------	---------------------------------	---------------------------	---

		части (мм)								наконечник м
	копьевидный	12,5 ±0,5	22 ±0,5	5,8 ±1,0	Карбид кремния	грубая 150 - 63	Бело-серый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 33,0 ± 2 мм
	Цилиндриче- ский закругленный	10 ±0,5	24,7 ±0,5	5,0 ±1,0	Карбид кремния	грубая 150 - 63	Бело-серый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3± 1,5 мм
	Копьевидный закругленный	6,6 ±0,5	17 ±0,5	2,2 ±1,0	Карбид кремния	грубая 150 - 63	Бело-серый	0,3 – 2	10'000 – 15'000	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм Длина стержня 32,3 ± 1,5 мм

14.24.3. Состав наборов KENDA BESTFLEX

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 6500.006	- полир копьевидный бело-серый – 2 шт., - полир цилиндрический закругленный бело-серый – 2 шт., - полир копьевидный закругленный бело-серый – 2 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 6508.006	- полир копьевидный бело-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

3	REF 6508.012	- полир копьевидный бело-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
4	REF 6508.025	- полир копьевидный бело-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
5	REF 6508.100	- полир копьевидный бело-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.
6	REF 6514.006	- полир цилиндрический закругленный бело-серый – 6 шт., - инструкция-вкладыш	6 шт.
7	REF 6514.012	- полир цилиндрический закругленный бело-серый – 12 шт., - инструкция-вкладыш	12 шт.
8	REF 6514.025	- полир цилиндрический закругленный бело-серый – 25 шт., - инструкция-вкладыш	25 шт.
9	REF 6514.100	- полир цилиндрический закругленный бело-серый – 100 шт., - инструкция-вкладыш	100 шт.
10	REF 6516.006	- полир копьевидный закругленный бело-серый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
11	REF 6516.012	- полир копьевидный закругленный бело-серый – 12 шт. - инструкция-вкладыш	12 шт.
12	REF 6516.025	- полир копьевидный закругленный бело-серый – 25 шт. - инструкция-вкладыш	25 шт.
13	REF 6516.100	- полир копьевидный закругленный бело-серый – 100 шт. - инструкция-вкладыш	100 шт.

14.25. XXV. Набор KENDA ZIRCO 1

REF 0230.006, REF 0233.006, REF 0240.006.

14.25.1. Краткое описание, функциональные характеристики: Наборы полиров с алмазными частицами мелкой зернистости. Рекомендованы для полировки циркония, дисиликата лития и фарфора с использованием техники различного давления на обрабатываемую поверхность. Одношаговый метод обработки. Требует процедуры очистки, дезинфекции, стерилизации перед первым применением и повторной обработки и стерилизации после каждого использования.

14.25.2. Технические характеристики

Внешний вид полира	Форма Полировальной головки	Диаметр головки в самой широкой части (мм)	Длина Головки полира (мм)	Масса (г) в граммах	Тип абразива	Зернистость, Размер частиц (мкм),	Цвет полира	Рекомендуемое усилие (Н)	Рекомендуемая (об./м)	Хвостовик/ стержень/совместимость с наконечником
	Копьевидный большой	6 ±0,5	10,7 ±0,5	1,1 ±0,2	Алмаз	мелкая 32 - 8	Зеленый лаймовый	0,3 - 2	7'500 – 15'000	Тип 1 Минимальная длина (зажимаемая часть) 11,0 мм
	Чашевидный большой	9,2 ±0,5	8,3 ±0,5	1,3 ±0,2	алмаз	мелкая 32 - 8	Зеленый лаймовый	0,3 - 2	7'500 – 15'000	RA Угловой/ Ø 2,35 (+0/-0,016) мм; Длина стержня 18,5 ± 0,9 мм

14.25. 3. Состав KENDA ZIRCO 1

N	REF	Состав	Общее число полиров в наборе
1	REF 0230.006	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый – 3 шт. - полир чашевидный большой зеленый лаймовый – 3 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
2	REF 0233.006	- полир копьевидный большой зеленый лаймовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
3	REF 0240.006	- полир чашевидный большой зеленый лаймовый – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.

14.26. XXVI. Набор KENDA дискодержатели

REF 342.001, REF 342.006, REF 342.100,

14.26.1. Краткое описание, функциональные характеристики

Набор KENDA дискодержатели совместимы с наборами KENDA WHEEL & KNIFE.

Для совмещения следует раскрутить винт дискодержателя, вставить винт в отверстие полира и закрутить винт с полиром до упора в нарезное отверстие дискодержателя. Дискодержатели совмещаются с дисками, используемыми в зуботехнических лабораториях. Не требуется стерилизация.

14.26.1.

Внешний вид дискодержателя	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Масса (г) в граммах	Хвостовик/стержень/совместимость с наконечником
	45,2 ± 2 мм,	Винт, 5,0 ±0,05	1.7 ±0,1	Тип 2 (для НР), Минимальная длина зажимаемой части 30,0 мм

Состав KENDA дискодержатели для WHEEL&KNIFE

N	REF	Состав	Общее число дискодержателей в наборе
1.	REF 342.001	- дискодержатель – 1 шт. - инструкция-вкладыш	1 шт.
2	REF 342.006	- дискодержатель – 6 шт. - инструкция-вкладыш	6 шт.
3	REF 342.100	- дискодержатель – 100 шт. - инструкция вкладыш	100 шт.

Инструкция – вкладыш

В каждый набор изделия вложена краткая инструкция-вкладыш. Инструкция вкладыш является единой для всех наборов и содержит информацию как для стерилизуемых наборов, так и для нестерилизуемых.

Информация, содержащаяся в инструкции-вкладыше

- Наименование изделия
- Материалы изготовления
- Показания
- Противопоказания
- Возможные побочные эффекты
- Меры предосторожности (включая следующие символы):



Не превышайте
максимальные
обороты



Наденьте средства
защиты органов
дыхания



Наденьте средства
защиты глаз



Применяйте
распыление воды с
расходом не менее 50
мл/мин


- Условия хранения
- Условия эксплуатации
- Очистка, дезинфекция, стерилизация перед применением  с указанием режима (если требуется стерилизация)
- Инструкция по повторной обработке, стерилизации
- Адрес производителя 
- **Rx only** – приобретение и использование МИ доступно только врачам и специализированному медицинскому персоналу.

15. Принципы и порядок работы

Человеческий язык способен воспринимать шероховатости размером в микрон. Полировка и финишная обработка с помощью полиров позволяют устранить микро шероховатости и придать зубной поверхности естественный блеск.

За выбор полира в каждом клиническом случае отвечает стоматолог.


1-шаговая система

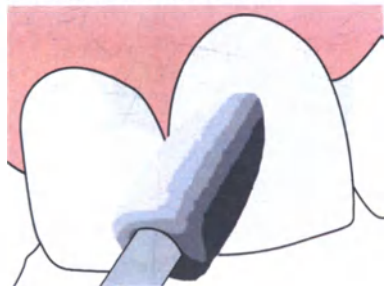

Специалист применяет одноэтапный метод обработки, используя только один вид полира, как правило, с алмазными частицами. В этом случае, специалист применяет технику изменения давления вращающегося полира на обрабатываемую область.

2-х шаговая система

При двухэтапном методе стоматолог использует два вида полиров.

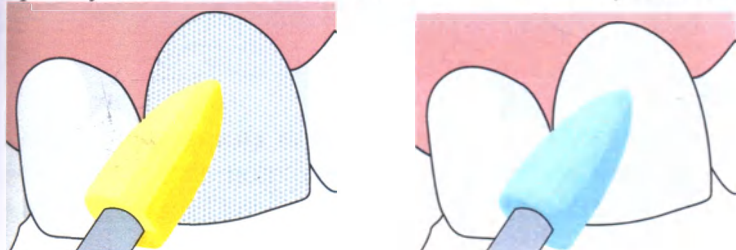

При двухэтапном методе стоматолог использует два вида полиров. Сначала обработка происходит с помощью полира с более грубым абразивом, за ней следует обработка более деликатным полиром.

3-х шаговая система




При использовании трех видов полиров с разной зернистостью врач начинает работу с наиболее грубого абразива, которым удаляются избытки материала и придается нужный контур зуба (реставрации). Второй шаг – сглаживание поверхности с помощью полира с более мелкой зернистостью. Блеск обрабатываемой поверхности достигается на третьем, финишном этапе, с помощью полира с самыми деликатными частицами.

Формы полиров и специфика их использования.

В состав медицинского изделия «Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA» включены полиры четырех основных групп по форме полировальной головки:

1. С заостренным кончиком (копьевидные, пламевидные большие, малые, средние)

Форма копьевидного полира очень удобна для обработки окклюзионных поверхностей, а также для областей шейки зуба (реставрации).

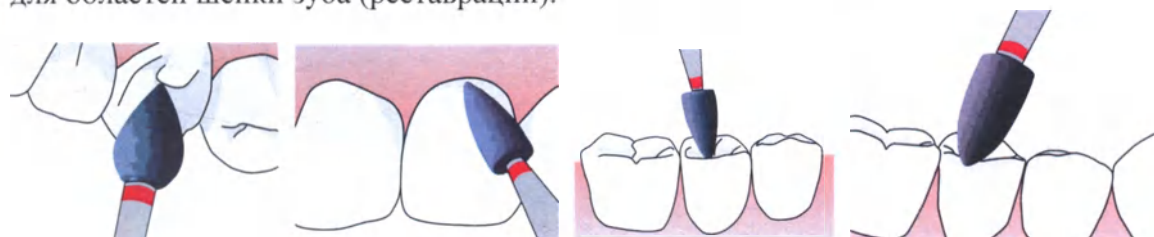


2. В форме чашечки (чашевидные малые, средние, большие, цилиндрические)

Чашевидные полиры подходят для обработки режущих (инцизивных) краев, щечных (буккальных) поверхностей и дистальных контактных поверхностей зуба (реставрации).



3.В форме плоских или выпуклых дисков (дисковидные, ножевидные)

Оба этих типа подходят для обработки больших поверхностей, а также режущих кромок и разделительных границ двух смежных областей из различных материалов.

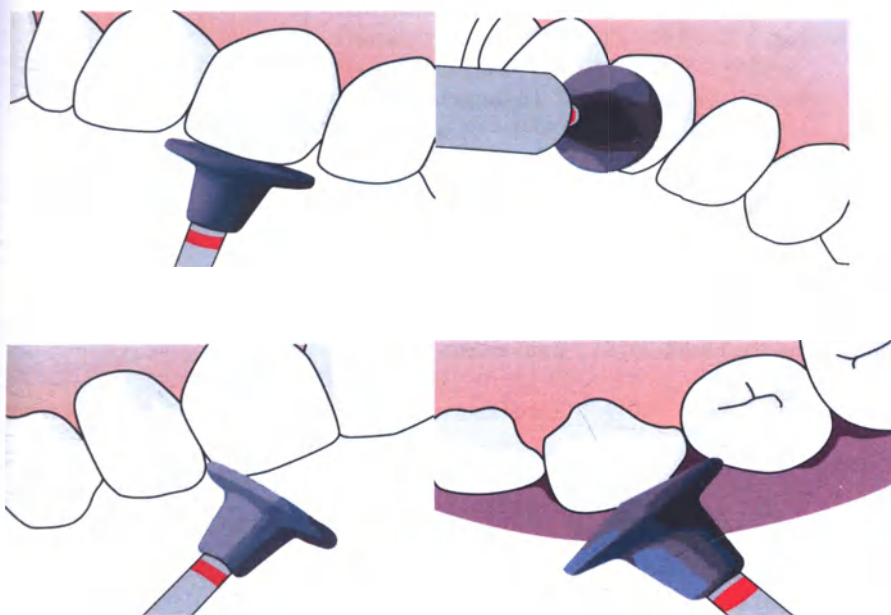

4. Грушевидные, типа «наггет»

Форма этих видов полиров очень удобна для обработки язычной поверхности резцов.

Рекомендуемое давление полира на обрабатываемую поверхность находится в пределах 0,3-2 Н.

Всегда используйте водяное охлаждение для предотвращения избыточного нагрева и необратимого повреждения зуба и окружающих тканей.



16. Содержание лекарственных средств

Изделие не содержит ни лекарственных средства, ни материалы животного и (или) человеческого происхождения.

17. Сведения о материалах

Наименование изделия или детали и принадлежности (исследуемые)	Материалы, применяемые при изготовлении
I. Набор KENDA NOBILIS:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив: CAS 7782-40-3, - Абразив оксид алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) - Пигмент желтый #1: CAS 30125-47-4 (yellow) - Пигмент белый : CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент синий #1: CAS 12239-87-1 (blue) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
II. Набор KENDA UNICUS:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, - Абразив из оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент оранжевый : 72102-84-2 (orange) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
III. Набор KENDA COMPLETE	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент красный: CAS 084632-65-5 (red) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
IV. Набор KENDA MAXIMUS:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
V. Набор KENDA DELUX:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
VI. Набор KENDA HYBRID:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, - Абразив из оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент черный: CAS 1317-61-9 (black) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент коричневый: CAS 1309-37-1 (brown) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104

VII. Набор KENDA COMPOSITE MICROFILL:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив из оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент желтый #1: CAS 30125-47-4 (yellow) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент зеленый: CAS 31837-42-0 (green) - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
VIII. Набор KENDA C.G.I.:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, - Абразив из оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент бирюзовый: CAS 1328-53-6 (turquoise) - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
IX. Набор KENDA ZIRCOVIS:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, - Пигмент синий #2: CAS 147-14-8 (blue) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент бирюзовый: CAS 1328-53-6 (turquoise) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
X. Набор KENDA ALL CERAMIC:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, - Пигмент красный: CAS 084632-65-5 (red) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XI. Набор KENDA DIAGUM:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив : CAS 7782-40-3, - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Пигмент коричневый: CAS 1309-37-1 (brown) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент синий #1: CAS 12239-87-1 (blue) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XII. Набор KENDA PROPHY:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Абразив оксид алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент белый : CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент синий #1: CAS 12239-87-1 (blue) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104

XIII. Набор KENDA PLANUS:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив оксид алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент зеленый #1 : CAS 1328-53-6 (green) Пигмент желтый #1 : CAS 30125-47-4 (yellow) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XIV. Набор KENDA AMALGAM	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Абразив оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент коричневый: CAS 1309-37-1 (brown) - Пигмент желтый #2: CAS 20344-49-4 (yellow) - Пигмент черный: CAS 1317-61-9 (black) - Пигмент зеленый #2: CAS 1308-38-9 (green) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XV. Набор KENDA PRECIOUS METALS:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Алмазный абразив: CAS 7782-40-3 - Пигмент черный: CAS 1317-61-9 (black) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент зеленый #1: CAS 1328-53-6 (green) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XVI. Набор KENDA FG SERIES:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив: CAS 7782-40-3 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Абразив оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) - Пигмент желтый # 3: CAS 31837-42-0 (yellow) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент желтый #1: CAS 30125-47-4 (yellow) - Пигмент коричневый: CAS 1309-37-1 (brown) - Пигмент желтый #2: CAS 20344-49-4 (yellow) - Пигмент черный: CAS 1317-61-9 (black) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XVII. Набор KENDA Z- SERIES:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив: CAS 7782-40-3 - Пигмент #1: CAS 31837-42-0 (yellow) - Пигмент зеленый #1 : CAS 1328-53-6 (green) - Пигмент синий #2 : CAS 147-14-8 (blue) - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XVIII. Набор KENDA HIGH END	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив: CAS 7782-40-3 - Пигмент синий #2: CAS 147-14-8 (blue) - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент зеленый #1: CAS 1328-53-6 (green)

	Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XIX. KENDA WHEEL&KNIFE	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Пигмент коричневый : CAS 1309-37-1 (brown) - Пигмент # : CAS 20344-49-4 (yellow) - Пигмент черный : CAS 1317-61-9 (black) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент желтый # 3: CAS 31837-42-0 (yellow) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XX. Набор KENDA QUEEN:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Пигмент черный: CAS 1317-61-9 (black) - Пигмент зеленый #2: CAS 1308-38-9 (green) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XXI. Набор KENDA ACRYLIC BLUE:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Абразив оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент желтый #3: CAS 31837-42-0 (yellow) - Пигмент желтый #1: CAS 30125-47-4 (yellow) - Пигмент розовый: CAS 1047-16-1 (pink) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) - Пигмент желтый #4: CAS 68186-90-3 (yellow) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XXII. Набор KENDA RED:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Абразив оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент коричневый: CAS 1309-37-1 (brown) - Пигмент белый: CAS 13463-67-7 (white) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104 Мандрель - Нержавеющая сталь 1.4104
XXIII. Набор KENDA YELLOW LINE	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив оксида алюминия: CAS 1344-28-1 - Пигмент желтый #3: CAS 31837-42-0 (yellow) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XXIV. Набор KENDA BESTFLEX:	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Абразив карбид кремния: CAS 409-21-2 - Пигмент белый: 13463-67-7 (white) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104

XXV. Набор KENDA ZIRCO 1	Головка полиров - Силикон: CAS 63394-02-5 - Алмазный абразив: CAS 7782-40-3 - Пигмент желтый #1: CAS 30125-47-4 (yellow) - Пигмент зеленый #1: CAS 1328-53-6 (green) Хвостовик - Нержавеющая сталь 1.4104
XXV. Набор KENDA дискодержатели	Хвостовик, винт - Нержавеющая сталь 1.4104
Индивидуальная упаковка	• коробка, картон: HF-V105 для (6 / 12шт): 280 г / м2, HF-V102 для (25 шт.): 350 г / м2, HF-V103 для (100 шт.): 400 г / м2 • вставка, вспененный полиуретан • полиэтиленовая крышка-пенал толщиной 0,2 мм • полиэтиленовая термоусадочная пленка • коробка полиэтилен низкой плотности PELLD, CAS 61128-46 • коробка полистирол

Материалы допущены для указанного применения. Основные требования перечислены в EN ISO 21671

Изделия изготовлены из материалов, не обладающих цитотоксическим, раздражающим, сенсibilизирующим и токсическим действием и при использовании не оказывают негативного воздействия на человека, полностью безопасны.

18. Сведения о верификации и валидации изделия

Полиры тестируются производителем «KENDA AG» в соответствии с EN ISO 8325 и EN ISO 1797. Формы полиров соответствуют требованиям с EN ISO 21671.


19. Требования к охране окружающей среды

Изделие при транспортировке, хранении и использовании не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

20. Очистка, дезинфекция, стерилизация перед применением

Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA поставляются нестерильным. Медицинское изделие предназначено для многократного применения. Перед применением и после каждого использования (см. п. 21. «Инструкция по повторной обработке и стерилизации») изделия с хвостовиками для углового и турбинного наконечника, а также Набор KENDA PLANUS для прямого наконечника должны пройти процедуру очистки, дезинфекции и стерилизации.

Индивидуальная упаковка стерилизуемых наборов промаркирована символом

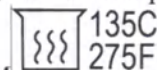

Все остальные наборы используются в зуботехнических лабораториях и проходят только процедуру очистки перед первым применением и после каждого использования.

Внимание! Все операции по подготовке, дезинфекции, очистке, упаковыванию в крафт-пакет, а также сам процесс стерилизации полиров проводятся специально обученным и инструктированным медицинским персоналом.

20.1. Методы очистки и дезинфекции перед первым применением

20.1.1. Ручная очистка изделий, не предназначенных для последующей стерилизации:

- Извлеките изделие из упаковки.
- Тщательно промойте изделие под струей воды. При необходимости используйте нейлоновую щетку.
- Высушите остатки влаги, предпочтительно чистым сжатым воздухом.
- С помощью 6-кратного увеличительного стекла визуально проверьте чистоту и целостность. При наличии видимых загрязнений необходимо повторить обработку.

20.1.2. Обработка изделий, предназначенных для последующей стерилизации:

Ручная обработка

- Извлеките изделие из упаковки.
- Тщательно промойте изделие под струей воды. При необходимости используйте нейлоновую щетку.
- Для дезинфекционного раствора используйте пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости, закрывающиеся крышками, по режимам, указанным в таблицах методических указаний.
- Производитель рекомендует приготовить рабочий раствор согласно инструкции по эксплуатации дезинфицирующего средства, не содержащего альдегиды, например, «Гигасепт Инстру АФ», производства «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия).
- Поместите изделие в раствор. Проследите за тем, чтобы на изделии не было воздушных пузырьков.
- После истечения времени дезинфекции промойте изделие большим количеством деионизированной воды.
- Высушите остатки влаги, предпочтительно чистым сжатым воздухом.
- С помощью 6-кратного увеличительного стекла визуально проверьте чистоту и целостность. При наличии видимых загрязнений необходимо повторить обработку.

Машинная обработка:

- Извлеките изделие из упаковки.
- Тщательно промойте изделие под струей воды.
- Поместите изделия в соответствующую подставку моющей/дезинфицирующей машинки и проследите за тем, чтобы они не касались друг друга.
- Добавьте рекомендованное чистящее средство (например, «Гигасепт Инстру АФ», производства «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия), не содержащее альдегидов.
- Запустите нужную программу: чистка и дезинфекция.
- После окончания программы выньте изделие из МД машины и высушите их предпочтительно чистым сжатым воздухом.
- С помощью 6-кратного увеличительного стекла визуально проверьте чистоту и целостность. При наличии видимых загрязнений необходимо повторить обработку.

20.2. Стерилизация перед первым применением

Рекомендуемый метод – паровое автоклавирование с использованием автоклава типа В (с предварительной вакуумизацией и вакуумной сушкой).

Внимание! Изделие нельзя стерилизовать горячим воздухом.

- Процедуру стерилизации проводит специально подготовленный специалист.
- Сухое изделие поместить в крафт-пакет.
- Режим стерилизации в автоклаве:

Рабочая температура (°C)	Избыточное давление пара (кПа)	Время стерилизационной выдержки (мин)
134 -135	250-300	от 5 до 7 мин

- Не превышать 135°C при автоклавировании.
- Время сушки после стерилизации в автоклаве – 10 минут.


Простерилизованное изделие готово к применению.

Внимание! При стерилизации большого количества инструментов в одном цикле автоклавирования, проследите за тем, чтобы не превышалась максимально допустимая загрузка автоклава согласно его инструкции по эксплуатации.

Для определения срока сохранения стерильности обратитесь к инструкции по применению производителя используемого крафт-пакета.

21. Инструкция по повторной обработке и стерилизации

После каждого сеанса использования изделия с хвостовиками для углового и турбинного наконечника, а также Набор KENDA PLANUS для прямого наконечника должны пройти процедуру очистки, дезинфекции и повторной стерилизации. Индивидуальная упаковка

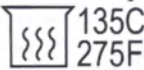

стерилизуемых наборов имеет символ. Все остальные наборы используются в зуботехнических лабораториях и проходят только процедуру очистки перед первым применением и после каждого использования.

Внимание	• Все операции по подготовке, дезинфекции, очистке, упаковыванию в крафт-пакет, а также сам процесс стерилизации полиров проводятся специально обученным и проинструктированным медицинским персоналом. • При процедуре дезинфекции не увеличивайте время воздействия дезинфицирующего средства, которое рекомендует производитель, так как избыток времени дезинфекции может привести к набуханию головки полиров. • Не используйте дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды. • Используйте только паровой метод стерилизации. Изделие нельзя стерилизовать горячим воздухом. • Не превышайте температуру 135°C при автоклавировании • При стерилизации большого количества инструментов в одном цикле автоклавирования проследите за тем, чтобы не превышалась максимально допустимая загрузка автоклава согласно его инструкции по эксплуатации.
Ограничения при проведении повторной обработки	• Повторная обработка оказывает минимальное воздействие на изделие. Срок службы изделия определяется физическим износом полировальной головки. Количество циклов стерилизации без ухудшения свойств полиров составляет 10 циклов стерилизации.
ИНСТРУКЦИИ	
Место использования	Нет специальных требований
Подготовка к деkontаминации	Нет специальных требований.
Очистка	<u>Ручная обработка</u>

Дезинфекция Сушка	• Извлеките изделие из наконечника. • Немедленно поместите полиры в закрытый лоток для инструментов и перенесите в зону обработки. • Тщательно промойте изделие под струей воды. При необходимости используйте нейлоновую щетку. • Для дезинфекционного раствора используйте пластмассовые или эмалированных (без повреждения эмали) емкости, закрывающиеся крышками, по режимам, указанным в таблицах методических указаний. • Производитель рекомендует приготовить рабочий раствор согласно инструкции по эксплуатации дезинфицирующего средства, не содержащего альдегиды, например «Гигасепт Инстру АФ», производства «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия). • Поместите изделие в раствор. Проследите за тем, чтобы на изделии не было воздушных пузырьков. • После истечения времени дезинфекции промойте изделие большим количеством деионизированной воды. • Высушите остатки влаги, предпочтительно чистым сжатым воздухом. • С помощью 6-кратного увеличительного стекла визуально проверьте чистоту и целостность. При наличии видимых загрязнений необходимо повторить обработку. Машинная обработка: • Извлеките изделие из наконечника. • Немедленно поместите полиры в закрытый лоток для инструментов и перенесите в зону обработки. • Тщательно промойте изделие под струей воды. • Поместите изделия в соответствующую подставку моющей/дезинфицирующей машинки и проследите за тем, чтобы они не касались друг друга. • Добавьте рекомендованное чистящее средство (например, «Гигасепт Инстру АФ», производства «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия), не содержащее альдегидов. • Запустите нужную программу: чистка и дезинфекция. • После окончания программы выньте изделие из МД машины и высушите их предпочтительно чистым сжатым воздухом. • С помощью 6-кратного увеличительного стекла визуально проверьте чистоту и целостность. При наличии видимых загрязнений необходимо повторить обработку.						
Техническое обслуживание	Изделие не подлежит техническому обслуживанию						
Упаковка	Изделие помещается в крафт-пакет подходящего размера						
Стерилизация	Рекомендуемый метод – паровое автоклавирование с использованием автоклава типа В (с предварительной вакуумизацией и вакуумной сушкой). Внимание! Изделие нельзя стерилизовать горячим воздухом. • Процедуру стерилизации проводит специально подготовленный специалист. • Сухое изделие поместить в крафт-пакет. • Режим стерилизации в автоклаве: <table><tr><th>Рабочая температура (°C)</th><th>Избыточное давление пара (кПа)</th><th>Время стерилизационной выдержки (мин)</th></tr><tr><td>134 -135</td><td>250-300</td><td>от 5 до 7 мин</td></tr></table> • Не превышать 135°С при автоклавировании. • Время сушки после стерилизации в автоклаве – 10 минут.	Рабочая температура (°C)	Избыточное давление пара (кПа)	Время стерилизационной выдержки (мин)	134 -135	250-300	от 5 до 7 мин
Рабочая температура (°C)	Избыточное давление пара (кПа)	Время стерилизационной выдержки (мин)					
134 -135	250-300	от 5 до 7 мин					
Хранение	Для определения срока сохранения стерильности обратитесь к инструкции по применению производителя используемого крафт-пакета.						
Дополнительная информация	• При стерилизации различного инструмента в одном стерилизаторе необходимо убедиться, что максимальная загрузка не была превышена						
Изготовитель	«KENDA AG», Kanalstrasse 18, 9490 Vaduz, Liechtenstein, Тел. +423 3882311, Факс: +423 3882319, e-mail: info@kenda-dental.com						

22. Применяемые международные стандарты.

Медицинское изделие Набор инструментов стоматологических полировальных KENDA

спроектировано и произведено в соответствии со следующими стандартами:
EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 21671, EN 980, EN ISO 1797-1, EN ISO 1797-2, EN ISO 8325/
EN 28325, EN 1041, EN 1639, EN ISO 10993-1.

Процедуры оценки соответствия осуществляется в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС, Приложением II и системой слепопроизводственного мониторинга.

23. Транспортировка

Изделия транспортируются в транспортной картонной коробке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с предохранением от прямого попадания солнечных лучей, в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте данного вида при температуре воздуха от +2 °С до + 28 °С и влажности воздуха от 10 до 80%.

24. Проект маркировки для России

Изделие упаковано в компактные коробочки, контейнеры, и в зависимости от размера тары информация на этикетке размещена на одной, двух или трех сторонах упаковки.



Обратитесь к
инструкции



Внимание! Перед
использованием
обратитесь к
сопроводительной
документации



от +2 до +28 °С



Беречь от прямых
Солнечных лучей

Rx only

KENDA
DENTAL POLISHERS

РУ № _____ от _____

Набор инструментов стоматологических полировальных
KENDA
Набор KENDA NOBILIS



0300.012



9.7143



0120



2022-07-17

Состав: 12 шт.: для композитов и керамики, RA



10000 Макс. Об, мин



135C
275F

Расшифровка символов на этикетке:

№	Описание
1	 Номер по каталогу
2	 Максимальное количество оборотов в минуту, рекомендованное при применении
3	 Пригодный для машинного считывания штрих-код
4	Состав: 12 шт.: для композитов и керамики, RA Число полировальных инструментов в наборе, материал, рекомендуемый для обработки, RA – с хвостовиком для углового наконечника.
5	 Наименование а адрес производителя
6	 Ограничение температуры при транспортировке и хранении
7	 Осторожно! Перед использованием обратитесь к сопроводительной документации
8	 Серийный номер продукции
9	 Срок годности (гггг-мм-дд)
11	 Беречь от солнечных лучей
12	 0120 Продукция отмечена знаком CE и отвечает всем требованиям директивы 93/42
13	Rx only Приобретение данного изделия доступно исключительно врачам или другому специализированному персоналу
14	 Логотип компании производителя
15	 135C 275F Требуется стерилизации перед применением

	при максимальной температуре 135 °С (присутствует на наборах, которые подвергаются стерилизации)
16	 Знак рециклинга упаковки

25. Хранение, срок годности, срок службы

Параметры окружающей среды при хранении:

температура воздуха от + 2°С до + 28° С ,

влажность воздуха от 10 до 80%,

Необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и пыли.

Условия эксплуатации:

Температура воздуха: от +15°С до +25°С,

Влажность воздуха: от 10 до 80%

Срок годности медицинского изделия составляет 4 года с даты производства, указан на этикетке.

Ориентировочный срок службы каждого полира составляет 10 циклов применения. В отдельных случаях изделие может применяться дольше, при условии, что нет видимых признаков физической изношенности. Степень изношенности и годность к применению определяется медицинским работником при визуальной оценке.

Количество циклов стерилизации без ухудшения свойств полиров составляет 10 циклов стерилизации.

26. Утилизация

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по правилам СанПиН 2.1.7.2790-10.

Неиспользованные изделия по истечении срока годности утилизируются:

- как медицинские отходы класса Б (если индивидуальная упаковка во время хранения была повреждена или нарушена) или простерилизованное изделие не было использовано до истечения срока сохранения стерильности.

- как медицинские отходы класса А (если индивидуальная упаковка не была нарушена).

- картонная транспортная упаковка пригодна для вторичной переработки.

27. Рекламации

По вопросам качества продукции обращаться к уполномоченному представителю производителя в России ООО «МедТестКонсалтинг», Россия, 123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1, корп.1, офис 193, medtestconsult@mail.ru, +7 (495) 750-29-01, +7 (903) 729-77-14.б

28. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия. Сервисное обслуживание

Изделия техническому обслуживанию и ремонту не подлежат.

29. Зарегистрированные модификации производителя «KENDA AG» в Российской Федерации.

Продукция компании «KENDA AG», Kanalstrasse 18, 9490 Vaduz, Liechtenstein была ранее зарегистрирована в РФ. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения выдано регистрационное удостоверение на МИ «Инструменты стоматологические ротационные для полировки и финишной обработки зубов Полишett одноразовые, в наборах» № РЗН 2018/7859 от 10.12.2018.

Перевод с английского языка на русский язык

KENDA / КЕНДА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛИРЫ

15.06.2020

/Подпись/
Фабиан Франк

/Подпись/
Лейла Франк

Перевод с немецкого языка на русский язык

Печать вверху на спине страницы: Княжеский окружной суд

Настоящим я подтверждаю подлинность подписей, поставленных

Г-ном Франк Фабианом, дата рождения: 26.09.1987

Адрес по собственным данным: FL – 9490 г. Вадуц, Каналштрассе 18

**Подлинность подтверждена подписью, которая хранится в окружном суде
Княжества**

Г-жой Франк Лейлой, дата рождения: 04.12.1989

Адрес по собственным данным: FL – 9490 г. Вадуц, Каналштрассе 18

**Подлинность подтверждена подписью, которая хранится в окружном суде
Княжества**

Г. Вадуц, 16.06.2020

Княжеский окружной суд, Гасснер Аня

Подписи/

Штамп: Аня Ирма Гасснер

Специалист отдела легализации

16 июня 2020 г.

Печать: Княжеский окружной суд. Квитанция об оплате сбора 20.- шв. франков

Печать: Княжеский окружной суд

Перевод данного текста выполнен переводчиком Краплиным Денисом Александровичем

Handwritten signature

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать пятого июня две тысячи двадцатого года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Краплина Дениса Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2020- *66-215*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

Handwritten signature
Л.В. Дейнеко

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 174 лист(-а, -ов).

Handwritten signature
Л.В. Дейнеко

