

542

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ USER MANUAL

Ортезы нижних конечностей «REN4MAT», в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»
«REN4MAT Sławomir Wroński» Польша

CEO
(должность/position)

Sławomir Wroński
(имя/name)

WŁAŚCICIEL
(подпись/signature)
Sławomir Wroński

М.П. / Stamp

 **REH4MAT** Sławomir Wroński
36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47
Tel. 16621-41-35 tel./fax 16621-42-13
NIP: 8131804393 REGON: 180151618

KANCELARIA NOTARIALNA 1
BOGDAN ROJOWSKI
NOTARIUSZ
BOGDAN CZERWONKA
NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 9
NIP: 813-32-81-114 Tel 853-48-01

Poświadczam, że w dniu 22.04.2021r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 9, Pan Sławomir Ryszard Wroński, syn Ryszarda i Alicji, Pesel 62011210715, zamieszkały 35-321 Rzeszów ul. Na Skąły 5B, legitymujący się dowodem osobistym numer AUE 145835, dokument niniejszy podpisał.-----

Pobrano takse notarialną na podstawie §.13 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564 ze zm.) w kwocie 20 złotych oraz podatek VAT 23% od tej kwoty w wysokości 4,60 złotych.-----

Rzeszów dnia 22.04.2021r.

Repertorium A numer 3597 /2021



Bogdan Czerwanka
NOTARIUSZ



Наименование медицинского изделия

1. Ортез на голеностопный сустав:

AM-OSS-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-02 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-OSS-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AM-OSS-03 (детский) (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)
AM-ASS-OS (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-04 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
R4M-SS-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-SS (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-SS-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
OSS-OS-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-03/CCA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
AM-OSS-03/CCA (детский) (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)
OSS-OS-04 (размеры для правой и левой ноги: M, L)
AM-OSS-05/CCA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OP-01 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-OP-02 (размеры для правой и левой ноги: M, L)
AM-SX-08 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-SX-05 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-05 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-05 (детский) (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)
AM-SX-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-SX-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-SX-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AM-SX-04 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-SX-06 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-SX-07 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-06 (универсальный) (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-OSS-06 (внутренний) (размеры для правой и левой ноги: M, L)
AM-OSS-06 (внешний) (размеры для правой и левой ноги: M, L)
AM-OSS-07 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-08 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-09 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-10 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-11 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-12 (размеры для правой и левой ноги: M, L)
AM-OSS-13 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-14 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-15 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-16 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-17 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-18 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL)
AM-OSS-19 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL)
AM-OSS-20 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)
EB-SS (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
U-SS (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
U-SS-01 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-OP-03 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
4ARMY-PU-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
4ARMY-SS-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
4ARMY-SS-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-OSS-22 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-OSS-23 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL)
AM-SB-09 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-SB-10 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AS-PU-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-PU-03 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL)
AS-PU-05 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AS-U-06 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-PU (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-PU-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
R4M-PU (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
U-PU (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-OSS-21/CCA (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
PCO-L-11 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
PCO-L-12 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
AM-OSS-25 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

2. Ортез на голеностопный и коленный суставы:

TB-05 с клапаном для льда (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AM-KDS-AM/1RE (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-KD-AM/1RE-ACL (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
AM-KDS-AM/1RE-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-KDS-AM/2R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AM-KDS-AM/2R-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

3. Ортез на коленный сустав:

OKD-09 (размеры для правой и левой ноги: универсальный, X-Size)
AS-KX-06 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AS-KX-05 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AS-KX-04 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-KX-08 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AS-KX-07 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AS-KX-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AS-KX-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AS-KX-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
U-SK (размеры для правой и левой ноги: универсальный, X-Size)
AM-OSK-Z (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AM-OSK-Z/P (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
AM-OSK-Z/S (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AM-OSK-Z/S-P (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
AM-OSK-Z/S-X (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
R4M-SK (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
R4M-SK/F (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-SK (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AS-SK-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
AS-SK-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AS-SK/F (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
TB-04 с клапаном для льда (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
AS-P/RZ (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
EB-P/RZ (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
U-SK-01 (размеры для правой и левой ноги: универсальный, X-Size)
U-SK-02 (размеры для правой и левой ноги: универсальный, X-Size)
AM-KDX-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
AM-KDX-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)

IB-SK/A (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 RAPTOR/2R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 EB-SK/P (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 IB-SK/2RA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 IB-SK/1R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 IB-SKL/2RA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 IB-SKL/1R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 IB-SKL/3 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL)
 ATTACK 1R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 ATTACK 2RA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 ZEUS (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 AM-TUD-KD-03 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-04 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 OKD-05 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 OKD-06 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 OKD-07 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 OKD-08 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 EB-SK/F (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 SPARTAN (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 OKD-Z/F (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 RAPTOR/1R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 ATOM/1R (размеры для правой и левой ноги: XS, S, M, L, XL)
 AM-OSK-O/1R-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)
 AM-OSK-Z/1R-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
 AM-OSK-ZL/1R-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)
 AM-OSK-OL/1R-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)
 AM-KD-AM/1R-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 OKD-01 (размеры для правой и левой ноги: M, L)
 OKD-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 ATOM/2RA (размеры для правой и левой ноги: XS, S, M, L, XL)
 RAPTOR/2RA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 EB-SK/A (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-OSK-Z/S-A (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-OSK-Z/S-A (детский) (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
 AM-OSK-ZJ/3 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 EB-SK/1R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 EB-SKL/3 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 EB-SKL/2RA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 EB-SKL/2RA-ACL (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-KD-AM/1RE (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 AM-KD-AM/1RE-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 AM-KD-AM/2RA-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 AM-KD-AM/1RE-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 AS-SK/A (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 EB-SK/2 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 EB-SK/2RA (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-OSK-Z/2RA-OR (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-KD-AM/3-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 EB-SKL/1R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-OSK-ZL/2RA-ACL (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AM-KD-AM/2R-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 AM-KD-DAM/1R (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
 AM-KDS-AJ/2R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)

5

ATOM ACL (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 RAPTOR BIONIC (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 OKD-23 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
 OKD-24 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 OKD-27 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 OKD-28 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-29 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 RAPTOR/2 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 AM-OSS-21 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 AM-OSS-24 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 AM-OSS-26 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)
 AM-OSS-27 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 AM-OSS-28 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 AM-OSS-29 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL)
 AS-U-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AS-U-04 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 AS-U-05 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)
 RW-ProFit (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 RW-Sport (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 RW-PowerFit (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 RW-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)
 RW-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL)
 FIX-KD-01 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 FIX-KD-02 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 FIX-KD-03 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 FIX-KD-04 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
 FIX-KD-05 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)
 FIX-KD-06 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 FIX-KD-07 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 FIX-KD-08 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 FIX-KD-09 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
 FIX-KD-10 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
 FIX-KD-12 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 FIX-KD-13 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 AM-KDX-01/1RE (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 AM-KDX-01/2R (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-03 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-03/10 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-03/20 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-16 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-17 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-18 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-19 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-20 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 OKD-25 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 AM-KDX-01 UNIVERSO (размеры для правой и левой ноги: универсальный)
 ATOM/2RA 4ARMY (размеры для правой и левой ноги: XS, S, M, L, XL)
 RAPTOR BIONIC 4ARMY (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 RAPTOR/2RA SHORT (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 RAPTOR/2 SHORT (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 OKD-31 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)
 AM-DOSK-Z/1R (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)
 AM-DOSK-O/1R (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)

IB-SK/2 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

4. Ортез на тазобедренный сустав:

AM-SB/1R (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)

4ARMY-U-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

AM-OSS-30 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL)

AM-SB-08 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB-07 (размеры: 16, 18, 20, 22, 24)

AS-PU-04 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AS-PU-06 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AS-U-01 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AS-U-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

FIX-KD-11 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

FIX-KD-19 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2)

OKD-26 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB/1RE (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB/2R (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB-01 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB-02 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

AM-SB-03 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

AM-SB-05 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB-06 (размеры для правой и левой ноги: универсальный, X-Size)

R4M-U (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

R4M-U-01 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

AS-U (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

TB-06 (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

U-U (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-SB/1RE DUAL (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-ADS-R (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

AM-ADS-R (детский) (размеры для правой и левой ноги: универсальный)

PCO-L-10 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)

PCO-L-03 (размеры: 1, 2, 3)

5. Ортез на коленный и тазобедренный суставы:

OKD-10 (размеры для правой и левой ноги: M, L, XL, XXL)

6. Ортез на всю ногу:

OKD-13 (размеры: универсальный)

OKD-14 (размеры для правой и левой ноги: S, M, L)

COMPLEX/2R (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL)

COMPLEX/2R DUAL (размеры: S, M, L, XL)

OKD-14 DUAL (размеры: S, M, L)

PCO-L-01 (размеры: 1, 2, 3)

PCO-L-08 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)

PCO-L-09 (размеры для правой и левой ноги: 1, 2, 3)

PCO-L-02 (размеры: 1, 2, 3)

7. Ортез на нижние конечности и туловище:

COMPLEX PLUS TLSO (размеры для правой и левой ноги: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

COMPLEX PLUS TLSO DUAL (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Разработчик и производитель
REN4MAT Slawomir Wronski
(PEX4MAT Славомир Вронски)
ul. Piaski 47, 36-060 Glogow Malopolski, Poland
+48 16 621 42 20
biuro@reh4mat.com

Уполномоченный представитель
Общество с ограниченной ответственностью “МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС”
ООО “МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС”
Россия, 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.56, корпус 2, пом.2
8-495-565-32-02
e.bashlakov@medical-distributors.ru

Назначение

Накладываемое снаружи ортопедическое приспособление, разработанное для поддержки, выравнивания, предотвращения или коррекции деформаций/травм или для улучшения функции тазобедренного сустава, колена, голеностопного сустава и стопы.

Условия/область применения

Ортезы следует применять исключительно в целях ортезирования нижних конечностей и только при условии отсутствия повреждений кожи в области ее контакта с изделием. Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями к применению.

Противопоказания

Во время использования ортеза в качестве обездвиживающей повязки (круглосуточно на протяжении 2-6 недель) – любые изменения установок необходимо согласовать с лечащим врачом. Не разрешается самостоятельно снимать ортез – можно лишь незначительно ослабить или сместить ленты

Слишком тесное наложение ортеза может примассати к ишемии пальцев, к ослаблению и/или нарушению чувствительности ноги или ее части

В случае кожных изменений в местах прилегания (повреждения кожного покрова, ранения, экземы кожи), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Использование ортеза ограничено – но возможно после наложения повязки

Необходимо особо контролировать правильное применение ортеза согласно рекомендациям врача — у детей, людей с нарушением памяти и психически больных.

Побочные действия

Отсутствуют

Классификация медицинского изделия

Медицинские изделия относятся к классу I в соответствии с требованиями директивы 93/42/ЕЕС. Оценка соответствия была осуществлена на основе Приложения VII Директивы

Риски применения медицинского изделия

Оценка менеджмента рисков была проведена и документирована в рамках основного плана и отчета по менеджменту рисков, включая:

- Анализ рисков по каждому изделию
- Назначение изделия и характеристики, влияющие на безопасность
- Потенциальные опасности
- Потенциальный клинический вред и сопутствующие серьезные последствия
- Анализ соотношения клинического риска и пользы

Был разработан анализ видов и последствий отказов для оценки рисков, связанных с ортезами с целью определения возможности использования медицинского изделия по назначению. В рамках процедуры производителем были определены опасности, связанные с использованием, конструкцией и процедурами. Опасности с неприемлемым уровнем риска были сокращены до приемлемого уровня путем изменения конструкции, проведения испытаний и других взаимоприемлемых мер. В настоящее время производитель использует процедуру оценки степени тяжести клинических рисков по шкале от незначительных до критических рисков. При выявлении неприемлемых уровней индекса рисков требовались меры для сокращения рисков. На основании анализа были выявлены и сокращены до приемлемых уровней все установленные и предвидимые заранее опасности и сопутствующие риски. Требования к менеджменту рисков соответствуют основным требованиям Приложения I к Директиве совета 93/42/ЕЕС по медицинским изделиям. С более подробной информацией можно ознакомиться в документе № XXX

Вид контакта с организмом человека
Поверхностный контакт с кожей

Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие полностью готово к эксплуатации. В техническом обслуживании не нуждается. В случае поломки или выходу из строя необходимо обратиться к уполномоченному представителю производителя.

Описание и технические характеристики медицинского изделия

AM-OSS-01																				
Общее описание Голеностопный бандаж изготовлен из легкой хлопчатой ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать. Повязка работает по принципу активного бандажа; ее можно для профилактики носить с любой обувью. Материал растягивается в длину, но не в ширину, что увеличивает компрессию. Показания • растяжения и вывиха голеностопного сустава, • предрасположенности к вывихам голеностопного сустава • воспаления, перегрузки связок и голеностопного сустава. Технические характеристики <table><tr><th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr><tr><td>Обхват</td><td>Обхват</td><td>Обхват</td><td>Обхват</td></tr><tr><td>лодыжки</td><td>лодыжки</td><td>лодыжки</td><td>лодыжки</td></tr><tr><td>19-22 см</td><td>22,5-25 см</td><td>25,5-30 см</td><td>30,5-34 см</td></tr></table>				Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват	Обхват	Обхват	Обхват	лодыжки	лодыжки	лодыжки	лодыжки	19-22 см	22,5-25 см	25,5-30 см	30,5-34 см	
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL																	
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват																	
лодыжки	лодыжки	лодыжки	лодыжки																	
19-22 см	22,5-25 см	25,5-30 см	30,5-34 см																	

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-01, Размер S	Д x Ш x Г (9,6 см, 13 см, 2 см), Масса 0,053 кг
AM-OSS-01, Размер M	Д x Ш x Г (10,8 см, 13 см, 2 см), Масса 0,059 кг
AM-OSS-01, Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 13 см, 2 см), Масса 0,065 кг
AM-OSS-01, Размер XL	Д x Ш x Г (13,2 см, 13 см, 2 см), Масса 0,072 кг

AM-OSS-02

Общее описание

Ортез голеностопного сустава изготовлен из перфорированного пространственного трикотажа, который учитывая свою перфорированную структуру имеет вентилирующие свойства, а также ленту VELCRO.

Изделие приятно на ощупь, благодаря применению внутренней перфорации, которая позволяет коже свободно дышать. Благодаря конусообразной форме и фиксирующей ленте, хорошо стабилизирует голеностопный сустав.

Показания

- Подворачивания и вывиха голеностопного сустава.
- Растяжения голеностопного сустава.
- При воспалительных состояниях, при перегрузках мышц и связок аппарата голеностопа.

Технические характеристики

Размер универсальный

Обхват голени 5 см над лодыжкой
мин 17 см — макс 34 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSS-02, Размер универсальный	Д x Ш x Г (22 см, 11 см, 5,5 см), Масса 0,106 кг
--	--

AM-OSS-03

Общее описание

Шнурованный ортез голеностопного сустава с боковым усилением Scout Am-oss-03 применяется в терапевтических и профилактических целях для поддержания стабильности голеностопного сустава в анатомически правильном положении. Изделие имеет среднюю степень жесткости и не подходит для травм, требующих полную неподвижность. Ортез представляет собой текстильную основу с боковыми анатомическими вставками, удерживающими стопу в правильном положении.

**Показания**

- Вывихи, ушибы
- Растяжение связок
- Заключительная фаза реабилитации после перелома
- Для профилактики травм во время занятия спортом

Технические характеристики

Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см	Размер XXL Обхват через пятку 39-41 см
--	--	--	---	--

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-03, Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 16 см, 5 см), Масса 0,214 кг
AM-OSS-03, Размер M	Д x Ш x Г (25,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,226 кг
AM-OSS-03, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 16 см, 5 см), Масса 0,238 кг
AM-OSS-03, Размер XL	Д x Ш x Г (28,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,250 кг
AM-OSS-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (30,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,267 кг

AM-OSS-03 (детский)

Общее описание

Детский ортез на голеностоп AM-OSS-03 разрабатывался с учетом максимального комфорта для ребенка. Основная особенность изделия заключается в усиленной боковой стабилизации, как сустава в целом, так и стопы, достигнутой с помощью:

- Анатомически профилированных боковых вставок
- Фиксирующей шнуровке
- Эластичных перекрещенных лент на застежке Велкро

Показания

- повреждение связок голеностопного сустава
- подворачивание и вывих голеностопного сустава
- привычный вывих голеностопного сустава
- болевой синдром голеностопного сустава и связочного аппарата
- заживление после гипсовой иммобилизации (переломы)
- хроническая нестабильность и воспаление
- профилактически в спорте
- изменения, такие как артрит.

Технические характеристики

Размер 1

Обхват через пятку
21-24 см

Размер 2

Обхват через пятку
24-27 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSS-03 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 4 см), Масса 0,11 кг
AM-OSS-03 (детский), Размер 2	Д x Ш x Г (20 см, 12 см, 4 см), Масса 0,12 кг

AM-ASS-OS

Общее описание

Данная модель изготовлена вручную, из комбинации прочных материалов – углеродного волокна и кевлара. Ортез CARBONAFO представляет собой упругую поддержку стопы и стабилизирующую конструкцию на голень.

Жесткие элементы ортеза обтянуты ортопедическим текстилем, который обеспечивает комфорт ношения и защищает кожу от натирания. Изделие фиксируется в области голени с помощью ремней на липучке.

Показания

- при неполном окружном параличе стоп
- при прогрессирующих дегенеративных изменениях голеностопного сустава на фоне сильных болевых симптомов
- при реабилитации после тяжёлых травм голеностопного сустава после хирургического вмешательства

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Длина ступни	Длина ступни	Длина ступни	Длина ступни
22-23,5 см	24-25,5 см	26-27,5 см	28-29,5 см
Высота изделия	Высота изделия	Высота изделия	Высота изделия
40 см	40 см	41 см	43 см



Габаритные размеры и масса

AM-ASS-OS, Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 12 см, 24 см), Масса 0,206 кг
AM-ASS-OS, Размер M	Д x Ш x Г (40 см, 12 см, 26 см), Масса 0,215 кг
AM-ASS-OS, Размер L	Д x Ш x Г (41 см, 12 см, 28 см), Масса 0,224 кг
AM-ASS-OS, Размер XL	Д x Ш x Г (43 см, 12 см, 30 см), Масса 0,236 кг

AM-OSS-04

Общее описание

Стабилизатор голеностопного сустава, снабженный дважды скрещенными лентами VELCRO.

Доступно на левую и правую конечность.

Изделие благоприятное для кожи пациента благодаря применению внутренней перфорации, позволяющей коже свободно дышать. Ортез голеностопного сустава стабилизирует голеностопный сустав и стопу

Показания



• при восстановлении после получения травм голеностопного сустава и плюсны (вывихи, переломы), которые лечат консервативным и хирургическим методами, • после получения повреждений ахиллова сухожилия, которые лечат консервативным и хирургическим методами • при серьезных дегенеративных изменениях голеностопного сустава и плюсны в сочетании со значительными болевыми ощущениями, • в повседневных занятиях при неполных и спазматических параличах стопы или всей нижней конечности.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-04, Размер S	Д x Ш x Г (18 см, 13 см, 3 см), Масса 0,53 кг
AM-OSS-04, Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 13 см, 3 см), Масса 0,62 кг
AM-OSS-04, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 3 см), Масса 0,71 кг
AM-OSS-04, Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 13 см, 3 см), Масса 0,81 кг

R4M-SS-01	
Общее описание Ортез голеностопного сустава относится к группе ULTRA BREATHING. В качестве основного волокна используется полиэстер. Ортез стабилизирует лодыжку и стопу; благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному давлению снимает боль и недомогания, оказывает уменьшение отеков, облегчает рассасывание экссудатов и гематом. Показания • после травм голеностопного сустава и ступня, не требующих иммобилизации • после хирургического лечения голеностопного сустава по травматическим и болезненным причинам • после повреждений ок. связки ахиллова сухожилия • при болевых синдромах на голеностопном	

суставе и ступне, вызванных травмами или перегрузками (чрезмерная тренировка или тяжелая физическая работа) • при воспалении подколенных сухожилий на уровне голеностопного сустава • при посттравматической хронической нестабильности голеностопного сустава • профилактически в видах спорта, которые сильно напрягают голеностопный сустав и ахиллово сухожилие-снижает риск повторных травм				
Технические характеристики				
Размер S Окружность над лодыжкой 21-23 см	Размер M Окружность над лодыжкой 23-25 см	Размер L Окружность над лодыжкой 25-27 см	Размер XL Окружность над лодыжкой 27-29 см	

Габаритные размеры и масса

R4M-SS-01, Размер S	Д x Ш x Г (21 см, 13 см, 1 см), Масса 0,040 кг
R4M-SS-01, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 1 см), Масса 0,044 кг
R4M-SS-01, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 1 см), Масса 0,047 кг
R4M-SS-01, Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 13 см, 1 см), Масса 0,050 кг

AS-SS	
Общее описание Бандаж голеностопный AS-SS относится к группе 4SPORT. Стабилизирует голеностопный сустав и стопу. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Особенно рекомендован при занятиях экстремальным и нетрадиционным спортом. Показания • при травмах голеностопного сустава не требующих жесткой фиксации • в послеоперационном периоде при долечивании травм и болезней • при повреждении Ахиллесова сухожилия • при болях в области голеностопного сустава и стопы вызванных травмами, перегрузкой (интенсивная тренировка, тяжёлая физическая	

• при комплексных болях голеностопного сустава и плюсны, вызванных травмами или перегрузкой (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой) • при воспалительных процессах слизистых сумок сухожилий на уровне голеностопного сустава • при посттравматической хронической нестабильности голеностопного сустава • профилактически в видах спорта, при чрезмерной нагрузке голеностопного сустава и ахиллова сухожилия – ортез снижает риск получения повторных травм.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

AS-SS-01, Размер S	Д x Ш x Г (21 см, 15 см, 2 см), Масса 0,087 кг
AS-SS-01, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 15 см, 2 см), Масса 0,098 кг
AS-SS-01, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 2 см), Масса 0,110 кг
AS-SS-01, Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 15 см, 2 см), Масса 0,122 кг

OSS-OS-02	
Общее описание Активный ортез, удерживающий стопу от провисания. Основная особенность конструкции - полужесткая эргономичная стелька-вкладыш под стопу и перекрещенные эластичные ленты. Компактный ортез поддерживает голеностопный сустав и стопу в естественно правильном положении и компенсирует нагрузку. С помощью регулировки натяжения эластичных лент положение стопы можно откорректировать – в зависимости от того в какую сторону подворачивается стопа (инверсия или эверсия) увеличивается натяжение внутренней или внешней ленты. Показания • паралич или слабость разгибателей стопы • вялая стопа • инсульт или кровоизлияние головного мозга	

• рассеянный склероз • ампутация пальцев или передней части стопы Технические характеристики									
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30,5-33 см	Размер L Обхват через пятку 33,5-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36,5-39 см						
Размер обуви 36 Длина стопы 23 см	Размер обуви 37 Длина стопы 24 см	Размер обуви 38 Длина стопы 24,5 см	Размер обуви 39 Длина стопы 25 см	Размер обуви 40 Длина стопы 25,5 см	Размер обуви 41 Длина стопы 26,5 см	Размер обуви 42 Длина стопы 27,5 см	Размер обуви 43 Длина стопы 28 см	Размер обуви 44 Длина стопы 28,5 см	Размер обуви 45 Длина стопы 29 см

Габаритные размеры и масса

OSS-OS-02, Размер S	Д x Ш x Г (22,5 см, 25 см, 5 см), Масса 0,149 кг
OSS-OS-02, Размер M	Д x Ш x Г (25,5 см, 25 см, 5 см), Масса 0,167 кг
OSS-OS-02, Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 25 см, 5 см), Масса 0,183 кг
OSS-OS-02, Размер XL	Д x Ш x Г (30,5 см, 25 см, 5 см), Масса 0,199 кг

AM-OSS-03/CCA	
Общее описание Ортез характеризуется хорошей посадкой на голеностопном суставе и эффективной стабилизацией благодаря использованию двойных скрещенных ремней, анатомически сформированных пластиковых креплений и системы шнуровки-Boa Fit System. Благодаря этой системе пользователь имеет возможность применять различный уровень сжатия, то есть силу воздействия ортеза на голеностопный сустав. Регулировка осуществляется плавным способом, что значительно улучшает эксплуатационные качества изделия. Boa Fit система функционирует на основе множества разнообразных полиамидных вкладышей, стальных тросов, покрытых пластиком, и шпульных храповых ручек. Такая конструкция изделия значительно улучшает прочность и полезные качества	

ортеза.
Ортез АМ-OSS-03/ССА может использоваться как в период лечения травм, так и в качестве профилактической защиты голеностопного сустава во время занятий спортом.

Показания

- растяжения и вывих голеностопного сустава,
- привычный вывих голеностопного сустава
- болевые синдромы голеностопного сустава и связочного аппарата,
- лечение после гипсовой иммобилизации (переломы голеностопного сустава, пяточной кости, артродез и реконструкция связочного аппарата голеностопного сустава)

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Окружность через пятку 27-30 см	Окружность через пятку 30,5-33 см	Окружность через пятку 33,5-36 см	Окружность через пятку 36,5-39 см	Окружность через пятку 39,5-41 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-03/ССА, Размер S	Д x Ш x Г (21,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,166 кг
АМ-OSS-03/ССА, Размер M	Д x Ш x Г (24,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,188 кг
АМ-OSS-03/ССА, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 16 см, 5 см), Масса 0,199 кг
АМ-OSS-03/ССА, Размер XL	Д x Ш x Г (29,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,211 кг
АМ-OSS-03/ССА, Размер 2XL	Д x Ш x Г (31 см, 16 см, 5 см), Масса 0,228 кг

АМ-OSS-03/ССА (детский)

Общее описание

Для того, чтобы защитить детскую лодыжку от травмирования или стабилизировать стопу на заключительном этапе восстановления после травмы, используется ортез АМ-OSS-03/ССА. В конструкции используется система застёжки ССА – механизм позволяет плавно регулировать компрессию с помощью надежной фиксации шнуровки. В конструкцию модели входят эластичные перекрещенные ремни, которые удерживают сустав в естественно правильном положении, защищая стопу от подворачивания внутрь/наружу. Эргономичные пластиковые элементы, повторяют анатомические изгибы голеностопной области и поддерживают сустав по центру. А также защищают от внешнего воздействия при занятиях спортом.



Показания

- перелом лодыжки
- повреждение связок голеностопного сустава
- подворачивание и вывих голеностопного сустава
- привычный вывих голеностопного сустава
- болевой синдром голеностопного сустава и связочного аппарата
- заживление после гипсовой иммобилизации (переломы)
- хроническая нестабильность и воспаление
- профилактически в спорте

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2
Обхват через пятку 21-24 см	Обхват через пятку 24,5-27 см
Подходит для возраста 2 – 6 лет	Подходит для возраста 6 – 12 лет
Полная высота изделия 17 см	Полная высота изделия 19 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-03/ССА (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (20,5 см, 15 см, 4 см), Масса 0,12 кг
АМ-OSS-03/ССА (детский), Размер 2	Д x Ш x Г (23 см, 15 см, 4 см), Масса 0,13 кг

OSS-OS-04

Общее описание

Ортез имеет открытую конструкцию, что позволяет его более точно подогнать и наложить на стопу. Материал, из которого изготовлен ортез, эластичный, прочный и одновременно очень тонкий, что позволяет носить ортез в любой обуви. Благодаря компрессии и съемной пелоте ортез поднимает свод стопы в физиологическое положение.

Показания

- Подошвенный фасциит
- Плоскостопие
- Синдром Мортона (метатарзальгия)
- дегенеративные деформации стопы.

Технические характеристики**Размер М**

Обхват плюсны стопы
18-23,5 см

Размер L

Обхват плюсны стопы
24-30 см

**Габаритные размеры и масса**

OSS-OS-04, Размер М	Д x Ш x Г (8 см, 0 см, 2,5 см), Масса 0,014 кг
OSS-OS-04, Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 0 см, 2,5 см), Масса 0,019 кг

AM-OSS-05/CCA**Общее описание**


Преимущество ортеза лодыжки AM-OSS-05/CCA в том, что его можно носить и на левой и на правой ноге. В ортезе применена система сильной шнуровки и мягкий язык, разгружающий место шнуровки.

В нем установлены двухсторонние профилированные вкладыши, эффективно стабилизирующие голеностопный сустав и хорошо прилегающие к стопе. Конструкция ортеза позволяет свободно носить его в спортивной обуви при занятиях спортом и в повседневных ситуациях.

Ортез обеспечивает хорошую стабилизацию благодаря боковым вкладышам, передней шнуровке и динамичным восьмеричным ремням, которые стабилизируют целый голеностопный сустав и стопу.

Показания

- растяжение связок голеностопного сустава
- вывих голеностопного сустава
- как защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений)
- хроническая нестабильность голеностопного сустава

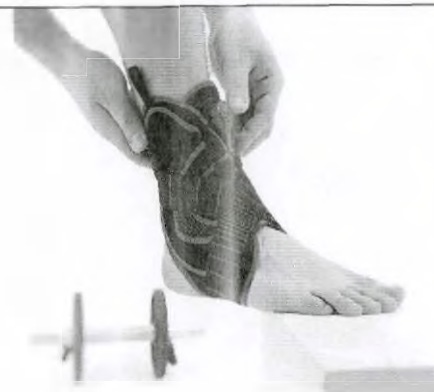

• острый или хронический артрит голеностопного сустава • профилактика в спорте			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30,5-33 см	Размер L Обхват через пятку 33,5-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36,5-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-05/ССА, Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 13 см, 6 см), Масса 0,125 кг
АМ-OSS-05/ССА, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 6 см), Масса 0,136 кг
АМ-OSS-05/ССА, Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 13 см, 6 см), Масса 0,146 кг
АМ-OSS-05/ССА, Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 13 см, 6 см), Масса 0,157 кг

АМ-ОР-01	
Общее описание Ортез большого пальца ноги АМ-ОР-01 предназначен для ношения в обуви. Состоит из мягкой накладки и ремня. Материал ортеза характеризуется мягкостью и высокой эластичностью. Показания • Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux rigidus) • дегенеративные изменения в суставе большого пальца ноги в плюсневой фаланге • бурсит Технические характеристики Размер - Универсальный, Расстояние от пятки к головке первой плюсневой кости мин 15 см — макс 30 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-ОР-01, Размер Универсальный	Д x Ш x Г (16 см, 5 см, 2,5 см), Масса 0,019 кг
--------------------------------	---

АМ-ОР-02

Общее описание

Ортез при бурсите большого пальца стопы АМ-ОР-02 предназначен для ношения дома и во время сна. Ортез корректирует и предотвращает вальгусную деформацию. Ортез состоит из профилированной боковой шины с разгрузкой большого пальца, мягкой подкладки из велкроткани, плюсневого ремня и ремня на большой палец. Подкладка уменьшает давление, а ремни позволяют подогнать изделие и удерживают его. Широкий плюсневый ремень сближает кости и поддерживает коррекцию. Ортез имеет метатарзальную пелоту поднимающую свод стопы предотвращая ее дальнейшую деформацию.

Показания

- Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux rigidus)
- дегенеративные изменения в суставе большого пальца ноги в плюсневой фаланге
- бурсит
- реабилитация после операции.

Технические характеристики**Размер М**

Обхват стопы
18 — 22 см

Размер L

Обхват стопы
22,5 — 28 см


**Габаритные размеры и масса**

АМ-ОР-02, Размер М	Д х Ш х Г (13,5 см, 9,5 см, 2,5 см), Масса 0,045 кг
АМ-ОР-02, Размер L	Д х Ш х Г (13,5 см, 12,5 см, 2,5 см), Масса 0,053 кг

АМ-SX-08**Общее описание**

Ортез состоит из двух анатомической формы пластиковых пластин, соединенных снизу лентой. Этот ремень регулируется по длине, так что устройство можно подогнать по ноге.

Для стабилизации устройства использует два ремня: верхний обхватывающий ремень с застежкой для надежного крепления на конечности, задний перекрестный ремень, который прикреплен подвижно к внутренней пластине, расположенной над ахилловым сухожилием и застегиваемый накрест на застежку, прикрепленную к наружной пластине.

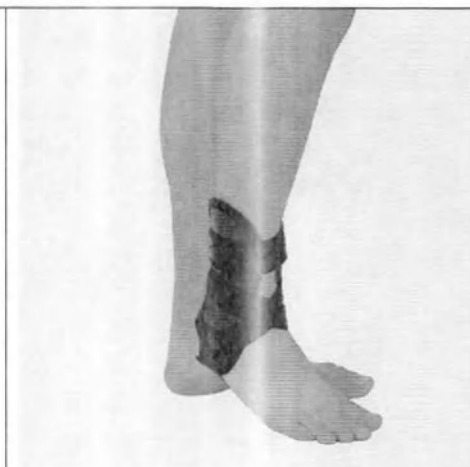

Показания • растяжение связок лодыжки, • вывих лодыжки, • окончательное лечение после гипсовой иммобилизации (перелом), • хроническая нестабильность и воспаление лодыжки, • профилактически в спорте.	
Технические характеристики	
Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

AM-SX-08, Размер Универсальный	Д x Ш x Г (22 см, 9,5 см, 5,5 см), Масса 0,118 кг
---------------------------------------	---

AM-SX-05				
Общее описание Ортез имеет шнуровку, что облегчает его адаптацию к ноге и увеличивает стабилизацию сустава, а также 2 боковые планшетки. Такая конструкция гарантирует высокую функциональность ортеза, он подходит для ежедневного использования.				
Показания • вывих и подвывих голеностопного сустава, • привычный вывих голеностопного сустава, • болевой синдром голеностопного сустава и связок, • лечение после снятия гипса (переломы), • хроническая нестабильность и воспалительные состояния, • профилактика в спорте.				
Технические характеристики				
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SX-05, Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 13 см, 2 см), Масса 0,044 кг
AM-SX-05, Размер M	Д x Ш x Г (15,5 см, 13 см, 2 см), Масса 0,044 кг

AM-SX-05, Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 13 см, 2 см), Масса 0,044 кг
AM-SX-05, Размер XL	Д x Ш x Г (18,5 см, 13 см, 2 см), Масса 0,044 кг

AM-OSS-05																			
Общее описание Ортез голеностопного сустава AM-OSS-05 с боковой поддержкой на шнуровках и динамическими ремнями обеспечивает стабилизацию лодыжки. Сустав эффективно стабилизируют боковые шины. Ортез можно носить в любой спортивной обуви. Ортез на голеностоп позволяет зафиксировать стопу в инверсии или эверсии. В зависимости от сустава можно корректировать положение стопы благодаря регулировке силы натяжения одного из двух эластичных ремней. Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте Технические характеристики <table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обхват</td><td>Обхват</td><td>Обхват</td><td>Обхват</td></tr> <tr> <td>через пятку</td><td>через пятку</td><td>через пятку</td><td>через пятку</td></tr> <tr> <td>27-30 см</td><td>30,5-33 см</td><td>33,5-36 см</td><td>36,5-39 см</td></tr> </tbody> </table>				Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват	Обхват	Обхват	Обхват	через пятку	через пятку	через пятку	через пятку	27-30 см	30,5-33 см	33,5-36 см	36,5-39 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL																
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват																
через пятку	через пятку	через пятку	через пятку																
27-30 см	30,5-33 см	33,5-36 см	36,5-39 см																
																			

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-05, Размер S	Д x Ш x Г (21,5 см, 14 см, 3,5 см), Масса 0,120 кг
AM-OSS-05, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 14 см, 3,5 см), Масса 0,126 кг
AM-OSS-05, Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 14 см, 3,5 см), Масса 0,132 кг
AM-OSS-05, Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 14 см, 3,5 см), Масса 0,138 кг

AM-OSS-05 (детский)

Общее описание

Конструкция изделия представляет собой текстильную основу на шнуровке с дополнительными стабилизирующими элементами – эластичными перекрещенными лентами на застежке липучке. Благодаря регулировке натяжения лент, стопу можно корректировать в трех положениях:

- Стандартное - обе ленты натянуты одинаково;
- Инверсивное выравнивание - левая (внешняя) лента натянута сильнее;
- Эверсивное выравнивание - правая (внутренняя) лента натянута сильнее.

Показания

- повреждение связок голеностопного сустава
- подворачивание и вывих голеностопного сустава
- привычный вывих голеностопного сустава
- болевой синдром голеностопного сустава и связочного аппарата
- заживление после гипсовой иммобилизации (переломы)
- хроническая нестабильность и воспаление
- профилактически в спорте

Технические характеристики

Размер 1

Обхват лодыжки
14 — 17 см
Подходит для возраста
2 – 6 лет
Общая высота изделия
20 см

Размер 2

Обхват лодыжки
17,5 — 20 см
Подходит для возраста
6 – 12 лет
Общая высота изделия
22 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSS-05 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (21 см, 10 см, 2 см), Масса 0,097 кг
AM-OSS-05 (детский), Размер 2	Д x Ш x Г (23 см, 10 см, 2 см), Масса 0,102 кг

AM-SX-01**Общее описание**

Ортез характеризуется хорошей посадкой на ногу пациента и эффективной стабилизацией сустава благодаря использованию боковой пелоты и специального спирального ремня.

В изделии используется мягкий язык, облегчающий место шнуровки изделия.

Снаружи изделие использует анатомическое пластмассовое усиление, а с медиальной стороны - набор из двух ортопедических косточек. Такая конструкция изделия улучшает стабилизацию голеностопного сустава и облегчает его использование.

**Показания**

- дистальный перелом лучевой кости (перелом Коллеса, Смита)
- после перенесенных травм радиально-запястного сустава
- при бурсите
- при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях
- вывих запястья
- растяжение запястья.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность через пятку 27-30 см	Окружность через пятку 30-33 см	Окружность через пятку 33-36 см	Окружность через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

AM-SX-01, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 17 см, 3 см), Масса 0,147 кг
AM-SX-01, Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 17 см, 3 см), Масса 0,154 кг
AM-SX-01, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 17 см, 3 см), Масса 0,163 кг
AM-SX-01, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 17 см, 3 см), Масса 0,171 кг

AM-SX-02**Общее описание**

Ортез имеет шнуровку, что облегчает ее адаптацию к конечности и увеличивает стабилизацию сустава.
Ортез имеет 2 боковые планшеты и систему быстрого монтажа.
Ортез можно использовать при завершении лечения травм, а также для профилактики и защиты голеностопного сустава во время занятий спортом.
Конструкция ортеза позволяет носить его с обувью в любой ситуации где требуется сильная стабилизация голеностопа.

**Показания**

- растяжения связок и вывих голеностопного сустава,
- привычный вывих голеностопного сустава,
- боли в лодыжке,
- после снятия гипсовой иммобилизации.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность через пятку 27-30 см	Окружность через пятку 30-33 см	Окружность через пятку 33-36 см	Окружность через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

AM-SX-02, Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 13,5 см, 5 см), Масса 0,094 кг
AM-SX-02, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 13,5 см, 5 см), Масса 0,103 кг
AM-SX-02, Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 13,5 см, 5 см), Масса 0,111 кг
AM-SX-02, Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 13,5 см, 5 см), Масса 0,119 кг

AM-SX-03**Общее описание**

Ортез имеет светло-серый цвет, подходящий к одежде и обуви для игры в теннис. Обеспечивает баланс между равновесием, защитой и поддержкой, не ограничивая функциональности голеностопного сустава.
Ортез AM-SX-03 имеет анатомической формы пластиковые вставки, которые различаются для левой и правой ноги, а также по размерам. Благодаря им ортез

надежно фиксирует сустав и защищает его от вывиха.

Показания

- После травм голеностопного сустава (вывихи, переломы) не требующих более жесткой иммобилизации
- Завершение лечение после переломов
- Нестабильность лодыжки
- Дегенерационные изменения в голеностопном суставе
- Профилактически при физической активности.



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват 5 см над внешней лодыжкой 21-24 см	Обхват 5 см над внешней лодыжкой 24,5-28 см	Обхват 5 см над внешней лодыжкой 28,5-32 см	Обхват 5 см над внешней лодыжкой 32,5-36 см	Обхват 5 см над внешней лодыжкой 36,5-40 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SX-03, Размер S	Д x Ш x Г (18 см, 10,5 см, 5 см), Масса 0,119 кг
АМ-SX-03, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 10,5 см, 5 см), Масса 0,132 кг
АМ-SX-03, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 10,5 см, 5 см), Масса 0,147 кг
АМ-SX-03, Размер XL	Д x Ш x Г (28,5 см, 10,5 см, 5 см), Масса 0,162 кг
АМ-SX-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 10,5 см, 5 см), Масса 0,178 кг

АМ-SX-04

Общее описание

Изделие снабжено спиральной лентой, стабилизирующей голеностопный сустав и прижимающей пластины к конечности. Такая конструкция изделия означает, что он отлично стабилизирует каждую лодыжку, предотвращая ее вывихи. Он обеспечивает сочетание баланса с защитой и поддержкой и не ограничивает функциональность голеностопного сустава. Каждый размер ортеза имеет разную форму пластин, другие пластины также встречаются при стабилизации

левой и правой ног. Чтобы облегчить надевание изделия, сзади была сделана застежка-молния, а по бокам - негибкие карманы для пластиковых пластин анатомической формы

Показания

- после перенесенных травм голеностопного сустава (растяжений, боковых переломов лодыжек, повреждения большеберцовой связки), не требующих жесткой иммобилизации
- в долечивании после перенесенных переломов
- после хирургического лечения голеностопного сустава по травматическим и болезненным причинам
- при посттравматической нестабильности голеностопного сустава
- при прогрессирующих дегенеративных поражениях голеностопного сустава со значительными болевыми жалобами

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность через пятку	Окружность через пятку	Окружность через пятку	Окружность через пятку
27-30 см	30-33 см	33-36 см	36-39 см



Габаритные размеры и масса

АМ-SX-04, Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 15 см, 6 см), Масса 0,218 кг
АМ-SX-04, Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см), Масса 0,234 кг
АМ-SX-04, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 6 см), Масса 0,252 кг
АМ-SX-04, Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 15 см, 6 см), Масса 0,269 кг

АМ-SX-06

Общее описание

Ортез АМ-SX-06 имеет шнуровку, что облегчает его адаптацию к ноге и увеличивает стабилизацию сустава, а также 2 боковые планшетки. Такая конструкция гарантирует высокую функциональность ортеза, он подходит для ежедневного использования.

Ортез можно применять на завершающей стадии лечения травм, а также как профилактическая защита голеностопного сустава во время занятий спортом. Конструкция ортеза позволяет свободно носить его в обуви.

Показания

- вывих и подвывих голеностопного сустава,
- привычный вывих голеностопного сустава,
- болевой синдром голеностопного сустава и



связок, • лечение после снятия гипса (переломы), • хроническая нестабильность и воспалительные состояния, • профилактика в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SX-06, Размер S	Д x Ш x Г (21 см, 17 см, 2 см), Масса 0,115 кг
АМ-SX-06, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 17 см, 2 см), Масса 0,124 кг
АМ-SX-06, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 17 см, 2 см), Масса 0,133 кг
АМ-SX-06, Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 17 см, 2 см), Масса 0,142 кг

АМ-SX-07			
Общее описание Для облегчения наложения ортеза и лучшей подгонки он имеет сзади открытую конструкцию. По бокам установлены неэластичные карманы для анатомически профилированных вставок из пластика с воздушными подушками. Воздушные камеры осуществляют микромассаж и предотвращают опухание и воспаление. Кроме того, изделие имеет спиральный ремень для стабилизации голеностопа и предотвращения смещения жестких вставок ортеза относительно конечности. Благодаря своей конструкции он стабилизирует голеностопный сустав, защищая его от вывиха. Поддерживает равновесие между защитой и поддержкой и не ограничивает функциональности сустава.			
Показания • вывих и растяжение связок лодыжки, • привычная дислокация лодыжки, • болевой синдрома голеностопного сустава и связочного аппарата лодыжки, • лечение после гипсовой иммобилизации (переломы), • хроническая нестабильность и воспаление.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват	Размер M Обхват	Размер L Обхват	Размер XL Обхват



ЛОДЫЖКИ 20-23 см	ЛОДЫЖКИ 23-25 см	ЛОДЫЖКИ 25-27 см	ЛОДЫЖКИ 27-29 см	
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Габаритные размеры и масса

АМ-SX-07, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 11 см, 6,5 см), Масса 0,145 кг
АМ-SX-07, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 11 см, 6,5 см), Масса 0,159 кг
АМ-SX-07, Размер L	Д x Ш x Г (23,5 см, 11 см, 6,5 см), Масса 0,171 кг
АМ-SX-07, Размер XL	Д x Ш x Г (25,5 см, 11 см, 6,5 см), Масса 0,183 кг

АМ-OSS-06 (универсальный)	
Общее описание Ортез обеспечивает терапевтическое сжатие, помогает уменьшить выпоты и гематомы. Ортез АМ-OSS-06 стабилизирует голеностопный сустав и защищает его от растяжения во время физической активности, например, - спортивной. В случае травмы и отека ортез обеспечивает терапевтическое сжатие, уменьшая воспаление и улучшая поглощение экссудатов. Ортез обеспечивает два уровня стабилизации. Ортез голеностопного сустава имеет специальный спиральный пояс, обеспечивающий стабилизацию передней малоберцовой связки (AFTL), которая наиболее сильно повреждается при инверсионном растяжении. Ортез лодыжки АМ-OSS-06 может использоваться как лечебно после перенесенной травмы, так и профилактически во время повышенной физической активности. Ортез слегка эластичен, обеспечивает терапевтическое сжатие сустава, улучшая абсорбцию экссудатов. Показания • растяжение и растяжение голеностопного сустава, • привычные вывихи голеностопного сустава, • болевой синдром голеностопного сустава и связочного аппарата, • долечивание после гипсовой иммобилизации (переломы) • хроническая нестабильность и воспаление • профилактически в спорте Технические характеристики	

Размер универсальный

Окружность через пятку мин 26 см – макс 40 см

Габаритные размеры и масса**AM-OSS-06 (универсальный), Размер универсальный**

Д x Ш x Г (23,5 см, 9 см, 5 см), Масса 0,094 кг

AM-OSS-06 (внутренний)**Общее описание**

Односторонний ортез голеностопного сустава с анатомическим внешним щитком стабилизирует голеностопный сустав и препятствует повреждению сустава.

Он отличается тем, что имеет щиток только с одной, внутренней стороны, благодаря чему не мешает быстро перемещаться и помещается в обувь. Щиток имеет анатомическую форму и обеспечивает хорошую стабилизацию. Щиток изготовлен из полиамида, окружает и защищает медиальную лодыжку от ударов и переломов в контактных видах спорта.

Показания

- вывих голеностопного сустава
- перелом наружной лодыжки
- повреждение наружных связок лодыжки
- нестабильность голеностопного сустава
- профилактика в спорте.

Технические характеристики**Размер М**Обхват лодыжки
20-25 см**Размер L**Обхват лодыжки
25,5-30 см**Габаритные размеры и масса****AM-OSS-06 (внутренний), Размер М**

Д x Ш x Г (18 см, 9 см, 5 см), Масса 0,078 кг

AM-OSS-06 (внутренний), Размер L

Д x Ш x Г (23,5 см, 9 см, 5 см), Масса 0,094 кг

AM-OSS-06 (внешний)

Общее описание

Односторонний ортез голеностопного сустава с анатомическим внешним щитком под названием KICKER. Этот ортез отличается тем, что имеет щиток только с одной, внешней стороны, благодаря чему не мешает быстро перемещаться и помещается в обувь. Щиток имеет анатомическую форму и обеспечивает стабилизацию. Щиток изготовлен из полиамида, окружает и защищает лодыжку от ударов и переломов в контактных видах спорта.

Показания

- вывих голеностопного сустава
- перелом наружной лодыжки
- повреждение связок медиальной лодыжки — повреждение дельтовидной связки
- нестабильность голеностопного сустава
- профилактика в спорте

Технические характеристики**Размер М**

Обхват лодыжки
20-25 см

Размер L

Обхват лодыжки
25,5-30 см

**Габаритные размеры и масса**

АМ-OSS-06 (внешний), Размер М	Д x Ш x Г (18 см, 9 см, 5 см), Масса 0,078 кг
АМ-OSS-06 (внешний), Размер L	Д x Ш x Г (23,5 см, 9 см, 5 см), Масса 0,094 кг

АМ-OSS-07**Общее описание**

Активный стабилизатор лодыжки с анатомическим силиконовым вкладышем АМ-OSS-07 использует эффективную в плане терапии комбинацию стабилизации и подвижности. Ортез систематически противодействует раздражениям в районе ахиллова сухожилия при помощи стабилизации, компрессии и микромассажа. Этому способствует силиконовый вкладыш, стимулирующий ткани выше пятки. Справа и слева вкладыш имеет силиконовые крылья стимулирующие переходы сухожилий в мышцы. Это облегчает и поддерживает подвижность пациента.

Показания

- Боли ахиллова сухожилия, тендинит ахиллова сухожилия, деформация Хаглунда,
- После травм ахиллова сухожилия — консервативное лечение и лечение хирургическим путем,
- При реабилитации после травм голеностопного



сустава и предплюсны (вывихи, переломы) — консервативное лечение и лечение хирургическим путем, • При сильных дегенеративных изменениях голеностопного сустава и плюсны в сочетании со значительными болями, • Профилактически в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-07, Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 12 см, 3,5 см), Масса 0,140 кг
АМ-OSS-07, Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 12 см, 3,5 см), Масса 0,151 кг
АМ-OSS-07, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 12 см, 3,5 см), Масса 0,162 кг
АМ-OSS-07, Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 12 см, 3,5 см), Масса 0,173 кг

АМ-OSS-08	
Общее описание Активная поддержка ортеза АМ-OSS-08 позволяет несмотря на травму перемещаться без боли. Во время ходьбы анатомически профилированные силиконовые вкладыши массируют голеностопный сустав. Этот микромассаж стимулирует кровообращение и уменьшает отек. Ортез легко одевать, он не сползает во время ходьбы. Активный стабилизатор лодыжки применяется при лечении перегрузок голеностопного сустава после травм и операций, а также при дегенеративно-дистрофических нарушениях голеностопного сустава. Два независимо подобранные профилированные вкладыша при медиальной лодыжке и латеральной лодыжке способствуют рассасыванию гематом. Показания • реабилитация после травм голеностопного сустава и ступни (переломы, вывихи) — консервативное лечение и лечение хирургическим путем, • после травм ахиллова сухожилия — консервативное лечение и лечение хирургическим путем, • выпот и опухоль сустава в случае остеоартрита или артрита,	

• тендомиопатия, • при сильных дегенеративных изменениях голеностопного сустава и плюсны в сочетании со значительными болями, • ослабленные связки голеностопа после травмы или дистрофии, • профилактически в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-08, Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 12,5 см, 2 см), Масса 0,063 кг
АМ-OSS-08, Размер M	Д x Ш x Г (15,5 см, 12,5 см, 2 см), Масса 0,068 кг
АМ-OSS-08, Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 12,5 см, 2 см), Масса 0,073 кг
АМ-OSS-08, Размер XL	Д x Ш x Г (18,5 см, 12,5 см, 2 см), Масса 0,078 кг

АМ-OSS-09	
Общее описание При болях в районе ахиллова сухожилия (напр. от перегрузки или после операции) активный ортез АМ-OSS-09 снимает нагрузку с ахиллова сухожилия, при этом не ограничивая его подвижности. Анатомической формы силиконовый вкладыш массирует и стимулирует ткани. Ортез имеет анатомическую форму и благодаря своей форме стимулирует кровообращение. Показания • Боли ахиллова сухожилия, тендинит ахиллова сухожилия, деформация Хаглунда, • После травм ахиллова сухожилия — консервативное лечение и лечение хирургическим путем, • При реабилитации после травм голеностопного сустава и предплюсны (вывихи, переломы) — консервативное лечение и лечение хирургическим путем, • При сильных дегенеративных изменениях голеностопного сустава и плюсны в сочетании со	

значительными болями, Профилактически в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-09, Размер S	Д x Ш x Г (13 см, 12 см, 5 см), Масса 0,177 кг
АМ-OSS-09, Размер M	Д x Ш x Г (14,5 см, 12 см, 5 см), Масса 0,191 кг
АМ-OSS-09, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 12 см, 5 см), Масса 0,205 кг
АМ-OSS-09, Размер XL	Д x Ш x Г (17,5 см, 12 см, 5 см), Масса 0,219 кг

AM-OSS-10				
Общее описание Основная задача ортеза AM-OSS-10 – поддержка голеностопного сустава и предотвращение провисания стопы. Модель представляет собой компрессионный бандаж на лодыжку и стопу с открытой пальцевой зоной и стабилизирующими элементами – эластичными лентами. Эластичные ленты на застежке – липучке обеспечивают компрессионную поддержку – регулируя их натяжение изменяется сила компрессии. Упругая текстильная основа частично выполняет работу мышц во время движения - возвращает стопу в анатомически правильное положение. Применение изделия способствует скорейшему восстановлению опорно-двигательных функций стопы после травм и хирургического вмешательства. А также препятствует развитию дегенеративных изменений в голеностопном суставе.				
Показания • ограниченное сгибание назад • парез разгибателей, стопа вялая и спастическая по причине: инсульта, рассеянного склероза, паралича малоберцового нерва и т.д.				
Технические характеристики				
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-10, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 13 см, 5 см), Масса 0,131 кг
АМ-OSS-10, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
АМ-OSS-10, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
АМ-OSS-10, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

АМ-OSS-11

Общее описание

Ортез имеет шнуровку, что облегчает ее адаптацию к конечности и увеличивает стабилизацию сустава.

Такая конструкция гарантирует высокую функциональность изделия при ежедневном использовании.

Ортез можно использовать при завершении лечения травм, а также для профилактики и защиты голеностопного сустава во время занятий спортом. Конструкция ортеза позволяет носить его с обувью в любой ситуации где требуется сильная стабилизация голеностопа.

Показания

- растяжения связок и вывих голеностопного сустава,
- привычный вывих голеностопного сустава,
- боли в лодыжке,
- после снятия гипсовой иммобилизации.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват через пятку	Обхват через пятку	Обхват через пятку	Обхват через пятку
27-30 см	30-33 см	33-36 см	36-39 см



Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-11, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 13 см, 5 см), Масса 0,131 кг
АМ-OSS-11, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
АМ-OSS-11, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
АМ-OSS-11, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

АМ-OSS-12

Общее описание

Ортез на голеностоп AM-OSS-12 имеет анатомичную форму и эластичен, благодаря чему рассеивает энергию в суставе. Мягкий и тонкий материал очень комфортный, а эластичные ремешки обеспечивают дополнительную стабилизацию.

Ортез универсальный на левую и правую конечность для мужчин и женщин.

Ортез на голеностоп позволяет зафиксировать стопу в инверсии или эверсии. В зависимости от сустава можно корректировать положение стопы благодаря регулировке силы натяжения одного из двух эластичных ремней.

Благодаря применению динамичных и тонких тканей он подходит для всех видов обуви, в том числе спортивной.

Ортез имеет двухсторонние, анатомической формы элементы жесткости.

**Показания**

- Легкие и умеренные растяжения и вывихи лодыжки,
- Хроническая нестабильность голеностопного сустава,
- Остеоартрит.

Технические характеристики**Размер М**

Обхват через пятку
27-33 см

Размер L

Обхват через пятку
33,5-39 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-12, Размер М	Д x Ш x Г (18,5 см, 13 см, 3,5 см), Масса 0,11 кг
AM-OSS-12, Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 13 см, 3,5 см), Масса 0,13 кг

AM-OSS-13**Общее описание**

По бокам ортеза есть карманы для установки ортопедических планшетонок. В зависимости от нужного уровня стабилизации можно установить по одной или по две вставки с каждой стороны. Таким образом ортез механически очень стойкий в случаях приложения больших сил, например, во время занятий спортом. Ортез очень хорошо адаптируется к стопе пациента и эффективно ее стабилизирует благодаря ремням и шнуровке. Ортез можно носить в спортивной обуви. Он подходит и на левую и на правую ногу.

Ортез можно носить и после травмы и профилактически как защиту лодыжки от травм.



Показания • растяжение связок лодыжки, • вывих лодыжки, • окончательное лечение после гипсовой иммобилизации (перелом), • хроническая нестабильность и воспаление лодыжки, • профилактически в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват
через пятку	через пятку	через пятку	через пятку
27-30 см	30,5-33 см	33,5-36 см	36,5-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-13, Размер S	Д x Ш x Г (21 см, 15 см, 3,5 см), Масса 0,153 кг
АМ-OSS-13, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 15 см, 3,5 см), Масса 0,165 кг
АМ-OSS-13, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 3,5 см), Масса 0,177 кг
АМ-OSS-13, Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 3,5 см), Масса 0,189 кг

АМ-OSS-14			
Общее описание Ортез голеностопного сустава с боковой поддержкой на шнуровках обеспечивает прекрасную стабилизацию лодыжки.			
Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват
через пятку	через пятку	через пятку	через пятку
27-30 см	30-33 см	33-36 см	36-39 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSS-14, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 13 см, 5 см), Масса 0,131 кг
AM-OSS-14, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
AM-OSS-14, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
AM-OSS-14, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

AM-OSS-15												
Общее описание Ортез голеностопного сустава с боковой поддержкой на шнуровках и динамическими ремнями обеспечивает прекрасную стабилизацию лодыжки. Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте. Технические характеристики <table><tr><th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr><tr><td>Обхват через пятку 27-30 см</td><td>Обхват через пятку 30.5-33 см</td><td>Обхват через пятку 33.5-36 см</td><td>Обхват через пятку 36.5-39 см</td></tr></table>				Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват через пятку 27-30 см	Обхват через пятку 30.5-33 см	Обхват через пятку 33.5-36 см	Обхват через пятку 36.5-39 см	
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL									
Обхват через пятку 27-30 см	Обхват через пятку 30.5-33 см	Обхват через пятку 33.5-36 см	Обхват через пятку 36.5-39 см									

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-15, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 13 см, 5 см), Масса 0,131 кг
AM-OSS-15, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
AM-OSS-15, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
AM-OSS-15, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

AM-OSS-16	
Общее описание Ортез на голеностоп изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Показания	

• вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-16, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 13 см, 5 см), Масса 0,131 кг
АМ-OSS-16, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
АМ-OSS-16, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
АМ-OSS-16, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

AM-OSS-17				
Общее описание Ортез на голеностоп изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава.				
Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте.				
Технические характеристики				
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-17, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 13 см, 5 см), Масса 0,131 кг
АМ-OSS-17, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
АМ-OSS-17, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
АМ-OSS-17, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

АМ-OSS-18								
Общее описание Ортез на голеностоп средней степени жесткости изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте Технические характеристики <table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Окружность над лодыжкой 22-24 см</td><td>Окружность над лодыжкой 25-27 см</td><td>Окружность над лодыжкой 27-29 см</td></tr> </tbody> </table>			Размер M	Размер L	Размер XL	Окружность над лодыжкой 22-24 см	Окружность над лодыжкой 25-27 см	Окружность над лодыжкой 27-29 см
Размер M	Размер L	Размер XL						
Окружность над лодыжкой 22-24 см	Окружность над лодыжкой 25-27 см	Окружность над лодыжкой 27-29 см						
								

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-18, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
АМ-OSS-18, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
АМ-OSS-18, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

АМ-OSS-19	
Общее описание Ортез на голеностоп средней степени жесткости на застежках липучках изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию	

сустава.		
Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте		
Технические характеристики		
Размер М Окружность над лодыжкой 22-24 см	Размер L Окружность над лодыжкой 25-27 см	Размер XL Окружность над лодыжкой 27-29 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-19, Размер М	Д x Ш x Г (21,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,141 кг
АМ-OSS-19, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
АМ-OSS-19, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,163 кг

АМ-OSS-20	
Общее описание Благодаря двойным крестообразным лентам VELCRO и синтетическому усилению анатомической формы со шнурками опора отлично стабилизирует лодыжку и стопу. В ортезе нога может хорошо дышать, а пот выводится из кожи пациента. Опору легко надевать и снимать, пациент может легко помыть ее и поддерживать надлежащую гигиену стопы.	
Показания • вывих голеностопного сустава • растяжение связок голеностопного сустава • защита после иммобилизации (после переломов, вывихов, растяжений) • хроническая нестабильность лодыжки • острая или хроническая травма лодыжки • профилактически в спорте	
Технические характеристики	
Размер 1 Обхват через пятку 21-24 см Подходит для возраста	Размер 2 Обхват через пятку 24,5-27 см Подходит для возраста



2 - 6 лет	6 – 12 лет	
-----------	------------	--

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-20, Размер 1	Д x Ш x Г (20,5 см, 13 см, 5 см), Масса 0,137 кг
AM-OSS-20, Размер 2	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг

EB-SS			
Общее описание Модель выполнена в виде носка с открытой пальцевой зоной из эластичного ортопедического материала. Благодаря застежке – клапану на липучке, изделие легко снимается и накладывается. Компактная конструкция ортеза позволяет использовать его со спортивной обувью или обувью для профессионального туризма. Основные характеристики ортеза заключаются в следующем: • Усиленная стабилизация голеностопного сустава и стопы, благодаря эластичности основы и дополнительным скрещенным лентам из прорезиненного текстиля. • Поддержка необходимой температуры для снятия болевого синдрома и отечности. • Компенсация нагрузки на мышцы и связки.			
Показания • при болях в области голеностопного сустава и стопы вызванных травмами, перегрузкой (интенсивная тренировка, тяжёлая физическая нагрузка), или по причине дегенеративных изменений • в воспалительных состояниях сухожильных сумок в области голеностопного сустава; • при повреждении Ахиллесова сухожилия • профилактически в спорте с повышенной нагрузкой на голеностопный сустав и Ахиллесово сухожилие • снижает риск повторных контузий			
Технические характеристики			
Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер М Обхват через пятку 30-33 см	Размер L Обхват через пятку 33-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36-39 см

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SS, Размер S	Д х Ш х Г (15 см, 13 см, 3 см), Масса 0,39 кг
ЕВ-SS, Размер M	Д х Ш х Г (16,5 см, 13 см, 3 см), Масса 0,42 кг
ЕВ-SS, Размер L	Д х Ш х Г (18 см, 13 см, 3 см), Масса 0,45 кг
ЕВ-SS, Размер XL	Д х Ш х Г (19,5 см, 13 см, 3 см), Масса 0,48 кг

U-SS	
Общее описание Бандаж голеностопный U-SS относится к группе 4CLASSIC и является изделием универсальным — безразмерным. Стабилизирует голеностопный сустав и стопу. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Эффективность воздействия зависит от применяемой обуви — рекомендована спортивная обувь, кроссовки, обувь для профессионального туризма, специализированная спортивная обувь. Показания • при травмах голеностопного сустава не требующих жесткой фиксации • при болях в области голеностопного сустава и стопы вызванных травмами, перегрузкой (интенсивная тренировка, тяжёлая физическая нагрузка), или по причине дегенеративных изменений • в воспалительных состояниях сухожильных сумок в области Ахиллесова сухожилия; • при повреждении связок голеностопа • в послеоперационном периоде при долечивании травм и болезней • профилактически в спорте с повышенной нагрузкой на голеностопный сустав и Ахиллесово сухожилие • снижает риск повторных контузий. Технические характеристики Размер универсальный Обхват через пятку мин 26 см — макс 39 см	

Габаритные размеры и масса

U-SS, Размер универсальный	Д х Ш х Г (15 см, 12 см, 4,5 см), Масса 0,103 кг
-----------------------------------	--

U-SS-01	
Общее описание Ортез голеностопного сустава U-SS-01 относится к группе 4CLASSIC, является универсальным изделием — безразмерным. Ортез стабилизирует голеностопный сустав и плюсну; благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он утоляет боль, уменьшает отеки, способствует рассасыванию выпотов и гематом. Это позволяет быстрее вернуться к работе или тренировке. Показания • после травм голеностопного сустава и плюсны, не требующих иммобилизации • после операционного лечения голеностопного сустава и плюсны вследствие травм и болезней • после повреждения в области фиксации ахиллова сухожилия • при комплексных болях голеностопного сустава и плюсны, вызванных травмами или перегрузкой (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой) • при воспалительных процессах слизистых сумок сухожилий на уровне голеностопного сустава • при посттравматической хронической нестабильности голеностопного сустава • профилактически в видах спорта, при чрезмерной нагрузке голеностопного сустава и ахиллова сухожилия – ортез снижает риск получения повторных травм. Технические характеристики Размер универсальный Обхват через пятку мин 26 см — макс 39 см	

Габаритные размеры и масса

U-SS-01, Размер универсальный	Д x Ш x Г (23 см, 14 см, 3 см), Масса 0,108 кг
-------------------------------	--

AM-OP-03	
Общее описание Ортез на вальгусную деформацию первого пальца стопы AM-OP-03 предназначен для применения дома и во время сна. Корректирует положение большого пальца и предотвращает появления деформации. Ортез имеет профилированную алюминиевую боковую шину, позиционирующую палец. Широкая повязка на	

стопу сводит плюсневые кости и усиливает коррекцию. АМ-ОР-03 предназначен для активной коррекции вальгусной деформации большого пальца стопы. Возвращает природное положение стопы, уменьшает боль в области большого пальца. Можно применять профилактически и после операции. Показания • Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux rigidus) • дегенеративные изменения в суставе большого пальца ноги в плюсневой фаланге • бурсит • реабилитация после операции Технические характеристики Размер универсальный Обхват стопы мин 18 см — макс 30 см	
--	--

Габаритные размеры и масса

АМ-ОР-03, Размер универсальный	Д x Ш x Г (16 см, 10 см, 6 см), Масса 0,119 кг
--------------------------------	--

4ARMY-PU-01	
Общее описание Ортез 4Army-PU-01 - это анатомический ортез голени, изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что безусловно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию, закрепленного сустава. Ортез имеет новый анатомический крой, а его конструкция дополнительно усилена. Дышащий, но прочный материал позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. Ортез голени обеспечивает хорошее сжатие, что увеличивает циркуляцию крови. Благодаря этому икроножные мышцы во время физической активности насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышенную эффективность их работы. Показания • болевой синдром икроножных и большеберцовых мышц, • болезненность медиальной стороны большеберцовой кости (shin splint) Технические характеристики	

Размер S Обхват голени 33-35,5 см	Размер M Обхват голени 35,5-38 см	Размер L Обхват голени 38-43 см	Размер XL Обхват голени 43-48 см	
---	---	---	--	--

Габаритные размеры и масса

4ARMY-PU-01, Размер S	Д x Ш x Г (41 см, 14 см, 3 см), Масса 0,159 кг
4ARMY-PU-01, Размер M	Д x Ш x Г (43,5 см, 15,5 см, 3 см), Масса 0,167 кг
4ARMY-PU-01, Размер L	Д x Ш x Г (46 см, 17 см, 3 см), Масса 0,176 кг
4ARMY-PU-01, Размер XL	Д x Ш x Г (51 см, 19 см, 3 см), Масса 0,188 кг

4ARMY-SS-01

Общее описание

Ортез 4army-SS-01-это анатомический ортез голеностопного сустава с поперечными ремнями. Анатомический крой и усиленная конструкция ортеза, а также система крестообразных ремней, стабилизирующих голеностопный сустав и предотвращающих вывихи, позволяют использовать наш стабилизатор даже в экстремальных условиях.

Показания

- после перенесенных травм голеностопного сустава, т. е. растяжения
- при последующем лечении после перенесенных переломов
- при нестабильности голеностопного сустава
- при дегенеративных поражениях голеностопного сустава
- профилактически во время физической активности



Технические характеристики

Размер S Обхват через пятку 27-30 см	Размер M Обхват через пятку 30,5-33 см	Размер L Обхват через пятку 33,5-36 см	Размер XL Обхват через пятку 36,5-39 см
--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SS-01, Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 14 см, 4 см), Масса 0,113 кг
4ARMY-SS-01, Размер M	Д x Ш x Г (24,5 см, 14 см, 4 см), Масса 0,143 кг

4ARMY-SS-01, Размер L	Д х Ш х Г (27 см, 14 см, 4 см), Масса 0,154 кг
4ARMY-SS-01, Размер XL	Д х Ш х Г (29,5 см, 14 см, 4 см), Масса 0,165 кг

4ARMY-SS-02

Общее описание

Ортез 4army-SS-02, является анатомическим ортезом голеностопного сустава с боковыми пластинами и спиральным поясом.

Полужесткие пластины анатомической формы обеспечивают стабилизацию и безопасность сустава.

Спиральный пояс ATFL предотвращает растяжение голеностопного сустава и защищает переднюю малоберцовую связку (ATFL).

Анатомический крой и усиленная конструкция ортеза и двухслойный спиральный ремень позволяют использовать наш ортез даже в экстремальных условиях.

Показания

- после перенесенных травм голеностопного сустава (растяжений, переломов щиколотки, повреждения большеберцовой связки), не требующих жесткой иммобилизации
- в долечивании после перенесенных переломов
- после хирургического лечения голеностопного сустава по травматическим и болезненным причинам
- при нестабильности голеностопного сустава
- при дегенеративных поражениях голеностопного сустава
- профилактически во время физической активности.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват
через пятку	через пятку	через пятку	через пятку
27-30 см	30.5-33 см	33.5-36 см	36.5-39 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SS-02, Размер S	Д х Ш х Г (24 см, 16 см, 5 см), Масса 0,220 кг
4ARMY-SS-02, Размер M	Д х Ш х Г (26,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,236 кг
4ARMY-SS-02, Размер L	Д х Ш х Г (29 см, 16 см, 5 см), Масса 0,254 кг
4ARMY-SS-02, Размер XL	Д х Ш х Г (31,5 см, 16 см, 5 см), Масса 0,272 кг

AM-OSS-22	
Общее описание Открытая конструкция ортеза облегчает его наложение и позволила выполнить изделие в одном универсальном размере. Он подходит и на правую и на левую ногу и хорошо подгоняется под форму и размер конечности. Ортез защищает голеностопный сустав во время усиленных нагрузок и физической активности. Показания • Вывих голеностопного сустава, • привычный вывих лодыжки, • болевой синдром голеностопного сустава и связочного аппарата, • лечение после гипсовой иммобилизации (переломы), • хроническая нестабильность и воспаление, • профилактически в спорте. Технические характеристики Размер универсальный Обхват через пятку мин 26 см — макс 39 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-22, Размер универсальный	Д x Ш x Г (10 см, 19 см, 2 см), Масса 0,26 кг
---------------------------------	---

AM-OSS-23	
Общее описание Защищает голень и стопу от травмирования в контактных видах спорта. Уменьшает боли в мышцах голени, вызванных растяжением и травмами. Благодаря поддержанию постоянной температуры и эластичному сжатию обладает противоопухолевым и болеутоляющим действием; улучшает впитывание жидкости и кровоподтеков после травм. Дает возможность быстрого возвращения к тренировкам и спорту. Показания и область применения назначает врач. Показания • Профилактически — защищает голень в контактном спорте. • Применяется при болях мышц голени на фоне растяжений (тренировки, перегрузки) и после травмирования (напр. после разрыва связок). • При опухолях голени вызванных травмами или растяжениями (слишком интенсивные тренировки, перегрузка).	

Технические характеристики			
Размер М Окружность голени 35,5-38 см	Размер L Окружность голени 38-43 см	Размер XL Окружность голени 43-48 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-23, Размер М	Д x Ш x Г (10 см, 18 см, 2 см), Масса 0,247 кг
АМ-OSS-23, Размер L	Д x Ш x Г (10 см, 19 см, 2 см), Масса 0,26 кг
АМ-OSS-23, Размер XL	Д x Ш x Г (10 см, 21,5 см, 2 см), Масса 0,278 кг

АМ-SB-09					
Общее описание Анатомический ортез голени изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Имеет защитную пластинку.					
Показания • Воспаление мышц икры • Растяжение икроножной мышцы • «Нога теннисиста» • Ушиб икры					
Технические характеристики					
Размер S Обхват голени 33-35,5 см	Размер М Обхват голени 35,5-38 см	Размер L Обхват голени 38,5-43 см	Размер XL Обхват голени 43,5-48 см	Размер XXL Обхват голени 48,5-53 см	Размер XXXL Обхват голени 53,5-58 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SB-09, Размер S	Д x Ш x Г (24,5 см, 20,5 см, 10 см), Масса 0,214 кг
АМ-SB-09, Размер М	Д x Ш x Г (26 см, 22 см, 10 см), Масса 0,225 кг
АМ-SB-09, Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 24 см, 10 см), Масса 0,242 кг
АМ-SB-09, Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 27 см, 10 см), Масса 0,259 кг

АМ-SB-09, Размер XXL	Д х Ш х Г (34,5 см, 30 см, 10 см), Масса 0,277 кг
АМ-SB-09, Размер XXXL	Д х Ш х Г (37 см, 33 см, 10 см), Масса 0,296 кг

АМ-SB-10					
Общее описание Анатомический ортез голени изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава.					
Показания • Воспаление мышц икры • Растяжение икроножной мышцы • «Нога теннисиста» • Ушиб икры					
Технические характеристики					
Размер S Обхват голени 33-35,5 см	Размер М Обхват голени 35,5-38 см	Размер L Обхват голени 38,5-43 см	Размер XL Обхват голени 43,5-48 см	Размер XXL Обхват голени 48,5-53 см	Размер XXXL Обхват голени 53,5-58 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SB-10, Размер S	Д х Ш х Г (24,5 см, 20,5 см, 10 см), Масса 0,214 кг
АМ-SB-10, Размер M	Д х Ш х Г (26 см, 22 см, 10 см), Масса 0,225 кг
АМ-SB-10, Размер L	Д х Ш х Г (28 см, 24 см, 10 см), Масса 0,242 кг
АМ-SB-10, Размер XL	Д х Ш х Г (31 см, 27 см, 10 см), Масса 0,259 кг
АМ-SB-10, Размер XXL	Д х Ш х Г (34,5 см, 30 см, 10 см), Масса 0,277 кг
АМ-SB-10, Размер XXXL	Д х Ш х Г (37 см, 33 см, 10 см), Масса 0,296 кг

AS-PU-02												
Общее описание Ортез на голень As-pu-02 снимает болевой синдром, разгружает икроножную мышцу и предотвращает отечность. Изделие представляет собой тугую повязку в виде гетры, с тройными компрессионными ремнями и системой микромассажа из силикона на внутренней стороне. Степень компрессии регулируется в трех местах с помощью застежек на липучке. Показания • Воспаление мышц икры • Растяжение икроножной мышцы • «Нога теннисиста» • Ушиб икры Технические характеристики <table><tr><th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr><tr><td>Обхват голени 33-35 см</td><td>Обхват голени 35,5-38 см</td><td>Обхват голени 38,5-43 см</td><td>Обхват голени 43,5-48 см</td></tr></table>				Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват голени 33-35 см	Обхват голени 35,5-38 см	Обхват голени 38,5-43 см	Обхват голени 43,5-48 см	
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL									
Обхват голени 33-35 см	Обхват голени 35,5-38 см	Обхват голени 38,5-43 см	Обхват голени 43,5-48 см									

Габаритные размеры и масса

AS-PU-02, Размер S	Д х Ш х Г (23,5 см, 11,5 см, 2,5 см), Масса 0,248 кг
AS-PU-02, Размер M	Д х Ш х Г (25,5 см, 12,5 см, 2,5 см), Масса 0,254 кг
AS-PU-02, Размер L	Д х Ш х Г (27 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,27 кг
AS-PU-02, Размер XL	Д х Ш х Г (31 см, 16 см, 2,5 см), Масса 0,289 кг

AS-PU-03	
Общее описание Анатомический ортез голени изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Средний степень компрессии. Показания • Воспаление мышц икры • Растяжение икроножной мышцы • «Нога теннисиста» • Ушиб икры Технические характеристики	

Размер М Обхват голени 35,5-38 см	Размер L Обхват голени 38-43 см	Размер XL Обхват голени 43-48 см	
--	--	---	--

Габаритные размеры и масса

AS-PU-03, Размер М	Д x Ш x Г (25,5 см, 12,5 см, 2,5 см), Масса 0,254 кг
AS-PU-03, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,27 кг
AS-PU-03, Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 16 см, 2,5 см), Масса 0,289 кг

AS-PU-05	
Общее описание Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он облегчает боль, уменьшает отеки, способствует рассасыванию гематом. Это позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Показания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач. Показания • при комплексных болях мышц голени, вызванных травмами или перенапряжением (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой) • при отеках голени, вызванных перенесенными травмами либо перегрузкой (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой); • для профилактики — ортез защищает голень Технические характеристики Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

AS-PU-05, Размер универсальный	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,27 кг
---------------------------------------	---

AS-U-06	
Общее описание Стабилизирует и разгружает голеностопный сустав, защищает стопу перед «опаданием». Исправляет динамику и эстетику походки у людей с неполным параличом стопы. Показания • при неполном окружном параличе стоп	

• при прогрессирующих дегенеративных изменениях голеностопного сустава на фоне сильных болевых симптомов • при реабилитации после тяжёлых травм голеностопного сустава после хирургических операций.				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Длина ступни	Длина ступни	Длина ступни	Длина ступни	
22-23,5 см	24-25,5 см	26-27,5 см	28-29,5 см	

Габаритные размеры и масса

AS-PU-02, Размер S	Д x Ш x Г (23,5 см, 11,5 см, 2,5 см), Масса 0,248 кг
AS-PU-02, Размер M	Д x Ш x Г (25,5 см, 12,5 см, 2,5 см), Масса 0,254 кг
AS-PU-02, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,27 кг
AS-PU-02, Размер XL	Д x Ш x Г (29,5 см, 15,5 см, 2,5 см), Масса 0,282 кг

AS-PU	
Общее описание Ортез голени относится к группе ACTIV SPORT, изготовлен из материала, характеризующегося мягкостью и высокой эластичностью, что облегчает прилипание изделия к конечности и гарантирует надлежащее сжатие голени. Это структурное сырье, состоящее из перфорированной неопреновой пены и полиамидных трикотажных чехлов. Благодаря перфорации, защищенный сустав дополнительно вентилируется, а также поддерживается надлежащее тепло. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, он снимает болевые ощущения, обладает эффектом уменьшения отечности, облегчает всасывание экссудатов и гематомы. Позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Показания • при болевых синдромах мышц голени, вызванных травмами или перегрузками (чрезмерная тренировка или тяжелая физическая работа) • при отеках голени, вызванных перенесенными травмами или перегрузками (чрезмерными тренировками или тяжелым физическим трудом)	

профилактически-выполняет защитную функцию голени			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени
33-35,5 см	35,5-38 см	38-43 см	43-48 см

Габаритные размеры и масса

AS-PU, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 17,5 см, 3 см), Масса 0,122 кг
AS-PU, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 19 см, 3 см), Масса 0,131 кг
AS-PU, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 22 см, 3 см), Масса 0,141 кг
AS-PU, Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 24 см, 3 см), Масса 0,150 кг

AS-PU-01					
Общее описание Бандаж голени относится к группе 4SPORT. Защищает голень и стопу от травмирования в контактных видах спорта. Уменьшает боли в мышцах голени, вызванных растяжением и травмами. Благодаря поддержанию постоянной температуры и эластичному сжатию обладает противоопухлевым и болеутоляющим действием; улучшает впитывание жидкости и кровоподтеков после травм. Дает возможность быстрого возвращения к тренировкам и спорту. Показания и область применения назначает врач.					
Показания • Профилактически — защищает голень в контактном спорте. • Применяется при болях мышц голени на фоне растяжений (тренировки, перегрузки) и после травмирования (напр. после разрыва связок). • При опухолях голени вызванных травмами или растяжениями (слишком интенсивные тренировки, перегрузка).					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени
33-35,5 см	35,5-38 см	38,5-43 см	43,5-48 см	48,5-53 см	53,5-58 см

Габаритные размеры и масса

AS-PU-01, Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 17,5 см, 3 см), Масса 0,200 кг
AS-PU-01, Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 19 см, 3 см), Масса 0,222 кг
AS-PU-01, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 3 см), Масса 0,247 кг
AS-PU-01, Размер XL	Д x Ш x Г (39 см, 24 см, 3 см), Масса 0,264 кг
AS-PU-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (41 см, 26,5 см, 3 см), Масса 0,282 кг
AS-PU-01, Размер XXXL	Д x Ш x Г (43 см, 29 см, 3 см), Масса 0,303 кг

R4M-PU																
Общее описание Бандаж для голени принадлежит группе ULTRA BREATHING. В качестве основного волокна используется полиэстер. Там, где это абсолютно необходимо, в сочетании с эластаном также используется полиэстер для повышения гибкости продукта и лучшей подгонки к суставу. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, он снимает болевые ощущения, обладает эффектом уменьшения отечности, облегчает всасывание экссудатов и гематомы. Позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Показания и правила применения определяет лечащий врач. Показания • при болевых синдромах мышц голени, вызванных травмами или перегрузками (чрезмерная тренировка или тяжелая физическая работа) • при отеках голени, вызванных перенесенными травмами или перегрузками (чрезмерными тренировками или тяжелым физическим трудом) Технические характеристики <table><tr><th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr><tr><td>Обхват голени</td><td>Обхват голени</td><td>Обхват голени</td><td>Обхват голени</td></tr><tr><td>33-35,5 см</td><td>35,5-38 см</td><td>38-43 см</td><td>43-48 см</td></tr></table>				Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	33-35,5 см	35,5-38 см	38-43 см	43-48 см	
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL													
Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени	Обхват голени													
33-35,5 см	35,5-38 см	38-43 см	43-48 см													

Габаритные размеры и масса

R4M-PU, Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 14 см, 1 см), Масса 0,042 кг
R4M-PU, Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 15 см, 1 см), Масса 0,048 кг
R4M-PU, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 17 см, 1 см), Масса 0,056 кг
R4M-PU, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 19 см, 1 см), Масса 0,063 кг

U-PU	
Общее описание Бандаж голени U-PU относится к группе 4CLASSIC, является универсальным изделием – безразмерным. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он облегчает боль, уменьшает отеки, способствует рассасыванию гематом. Это позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Показания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач. Показания • при комплексных болях мышц голени, вызванных травмами или перенапряжением (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой) • при отеках голени, вызванных перенесенными травмами либо перегрузкой (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой); • для профилактики — ортез защищает голень. Технические характеристики Размер универсальный Обхват голени 15 см от колена мин 25 см — макс 45 см	

Габаритные размеры и масса

U-PU, Размер универсальный	Д х Ш х Г (27 см, 19 см, 2 см), Масса 0,19 кг
----------------------------	---

AM-OSS-21/CCA	
Общее описание Ортез позволяет свободно поднимать ногу и обеспечивает правильный образец движения. Лента изготовлена из легкого и приятного для кожи термоформованного материала. Его оптимальная длина обеспечивает широкий диапазон регулировки окружности, благодаря чему ортез может быть одного универсального размера. Ортез на падающую ногу AM-OSS-21 / CCA - это простой и быстрый в использовании продукт. Просто пристегните ремешок на щиколотке и прикрепите ленты к шнуровкам, затем поверните механизм Boa®, чтобы установить нужную высоту. С помощью полученного рычага ортез с каждым шагом поднимает перед ноги и позволяет правильно напрягать и перемещать ногу во время походки. Чем сильнее будет затянут механизм, тем выше будет поднятая нога. Показания	

• парез или слабость разгибателей стопы (падающая стопа) • вялая нога • состояние после инсульта или церебрального инсульта • рассеянный склероз • церебральный паралич (МРД) • сахарный диабет • травма / сдавливание голени • мышечная дистрофия	
Технические характеристики	
Размер универсальный	
Окружность над лодыжкой мин 20 – макс 30 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-21/ССА, Размер универсальный	Д x Ш x Г (10 см, 18 см, 2 см), Масса 0,076 кг
--	--

PCO-L-11	
Общее описание Компрессионный ортез голени PCO-L-11 улучшает стабилизацию и контроль поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижней конечности, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую и динамичную стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка. Ортез помогает при ходьбе, удерживании равновесия и стабилизации нижней конечности. Ортез голени повышает проприоцепцию нижних частей конечности и значительно улучшает походку ребенка. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм	

• синдром Ретта.			
Технические характеристики			
Размер 1 Обхват голени 16-22 см	Размер 2 Обхват голени 23-27 см	Размер 3 Обхват голени 28-33 см	

Габаритные размеры и масса

PCO-L-11, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 9 см, 1 см), Масса 0,02 кг
PCO-L-11, Размер 2	Д x Ш x Г (24 см, 12 см, 1 см), Масса 0,024 кг
PCO-L-11, Размер 3	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 1 см), Масса 0,029 кг

PCO-L-12	
Общее описание Компрессионный ортез голеностопного сустава PCO-L-12 улучшает стабилизацию и контроль поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижней конечности, главным образом голеностопного сустава, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую и динамичную стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка. Ортез помогает при ходьбе, удерживании равновесия и стабилизации нижней конечности. Ортез голеностопного сустава повышает проприоцепцию в области голеностопного сустава и положительно влияет на сохранение правильного образца движений ребенка. Глубокая компрессия ортеза облегчает эксцентрическое торможение ступни во время марша, ее перенос и отталкивание. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия	

• дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта.			
Технические характеристики			
Размер 1 Обхват через пятку 21-24 см	Размер 2 Обхват через пятку 24,5-27 см	Размер 2 Обхват через пятку 27,5-30 см	


Габаритные размеры и масса

PCO-L-12, Размер 1	Д x Ш x Г (17 см, 8 см, 1 см), Масса 0,013 кг
PCO-L-12, Размер 2	Д x Ш x Г (22 см, 10 см, 1 см), Масса 0,015 кг
PCO-L-12, Размер 3	Д x Ш x Г (25 см, 12 см, 1 см), Масса 0,018 кг

AM-OSS-25	
Общее описание Ортез стопы AM-OSS-25 помогает вернуть утраченные функции активно усиливая поднятие стопы у пациентов с парезом разгибателей стопы, особенно у пациентов, страдающих гемиплегией после инсульта и у пациентов с расстройствами и дегенерацией периферических нервов. Ортез стопы имеет полужесткий вкладыш усиливающий поднятие стопы и корректирующий ее положение. Он очень прочный и достаточно эластичный. Систематическое ношение вырабатывает у пациента правильную походку, устраняя привычку неправильных компенсирующих движений. Ортез улучшает динамику ходьбы, пассивно и активно корректирует инверсию стопы. Показания • паралич или слабость разгибателей стопы • вялая стопа • инсульт или кровоизлияние головного мозга • рассеянный склероз • ампутация пальцев или передней части стопы. Технические характеристики Размер универсальный Окружность через пятку мин 26 см – макс 40 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-25, Размер универсальный	Д x Ш x Г (40 см, 13 см, 2 см), Масса 0,144 кг
---------------------------------	--

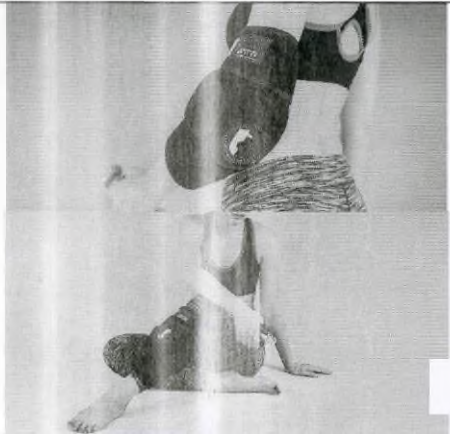ТВ-05 с клапаном для льда	
Общее описание Открытая неопреновая ортопедическая конструкция и наш фирменный клапан для отвода воздуха обеспечивают отличную адгезию мешка со льдом к различным частям тела, окутывая его низкой температурой и тем самым создавая мгновенную "холодную повязку". Благодаря своей универсальной форме ортез ТВ-05 отлично охлаждает локтевой сустав, предплечье, лодыжку и голень. Показания • растяжение/вывих коленного сустава, • привычный вывих голеностопного сустава, • болевой синдром коленного сустава и связочного аппарата, • теннисный локоть, • локоть гольфиста, • растяжение/перегрузки локтевого сустава, • растяжение/перегрузка запястья, • воспаление мышц голени, • перегрузка и разрывы в икроножных мышцах, • „нога теннисиста”, • напряжение медиальной стороны кости " (SHIN SPLINT), • хроническая нестабильность и воспалительные процессы в суставах. Технические характеристики Размер универсальный Окружность через пятку мин 26 см – макс 40 см	

Габаритные размеры и масса

ТВ-05 с клапаном для льда, Размер универсальный	Д x Ш x Г (27 см, 20 см, 6 см), Масса 0,261 кг
---	--

Общее описание


Ортез стабилизирует и разгружает коленный и голеностопный суставы, предотвращает опадание стопы; позволяет постепенно и под контролем увеличивать диапазон движений в коленном суставе; легко прилегает к конечности даже у людей с диспропорцией окружностей бедра и голени или при значительно утолщенном контуре коленного сустава. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач. Он оснащен также ортопедическими шинами 2R с системой их крепления и набором лент VELCRO.

Показания

- при тяжелой неустойчивости или дегенеративных изменениях коленного сустава в сочетании с парезом стопы (например, в стадии паралитической ишиалгии, болезнь Гейне Медина, SM)
- при парезе нижних конечностей — в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов
- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики) у лиц с парезом стопы или всей нижней конечности
- для профилактики и лечения контрактур коленного и голеностопного суставов, вызванных парезом или дегенеративными изменениями.

Технические характеристики

Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки: мин 40 см — макс 75 см
Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки: мин 30 см — макс 55 см

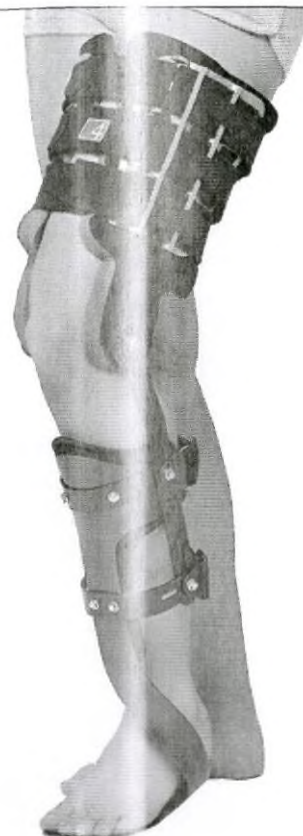

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Длина стопы 22-23,5 см	Длина стопы 24-25,5 см	Длина стопы 26-27,5 см	Длина стопы 28-29,5 см

Габаритные размеры и масса

AM-KDS-AM/1RE, Размер S	Д x Ш x Г (52 см, 28 см, 8 см), Масса 1,008 кг
AM-KDS-AM/1RE, Размер M	Д x Ш x Г (56,5 см, 30 см, 8 см), Масса 1,085 кг
AM-KDS-AM/1RE, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 32 см, 8 см), Масса 1,167 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KD-AM/IRE-ACL

Общее описание

Ортез AM-KD-AM/IRE-ACL охватывает максимальную площадь нижней конечности. Стабилизация коленного сустава осуществляется фиксацией изделия не только на голени и бедре, но и в области над лодыжкой. Таким методом снимается часть нагрузки с голеностопного сустава, что в целом ускоряет процесс восстановления. Изделие полностью иммобилизует подвижность сустава по бокам и позволяет постепенно увеличивать нагрузку с помощью регулировки угла сгибания. Такие свойства особенно необходимы пациентам после операций на коленном суставе и в период вертикализации.

Модульная архитектура ортеза включает в себя:

- Текстильная основа - рукава на голень и бедро, а также фиксирующая манжета над лодыжкой.
- Ортопедические шины с анатомическим рельефом. Расположены по бокам изделия. Соединены между собой системой контроля сгибания на шарнирной основе. Регулировка угла осуществляется с шагом в 15 – 30 градусов.

Фиксация изделия на ноге осуществляется с помощью ленточных ремней на застежке – липучке, что позволяет оптимально подогнать объем под индивидуальные параметры. Ортез применяется только по назначению врача.

Показания

- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики)
- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют оперативного лечения или не классифицируются к нему
- в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов
- для профилактики и лечения контрактур коленного сустава вызванных парезом или болезненными изменениями



Технические характеристики		
Размер S Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44-52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-42 см Расстояние от колена до паха 21,5 см Расстояние от колена до лодыжки 30-35 см	Размер M Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 25,5 см Расстояние от колена до лодыжки 34-40 см	Размер L Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 28,5 см Расстояние от колена до лодыжки 37-43 см

Габаритные размеры и масса

AM-KD-AM/1RE-ACL, Размер S	Д x Ш x Г (56,5 см, 25 см, 7 см), Масса 0,79 кг
AM-KD-AM/1RE-ACL, Размер M	Д x Ш x Г (65,5 см, 28 см, 7 см), Масса 0,84 кг
AM-KD-AM/1RE-ACL, Размер L	Д x Ш x Г (70 см, 28 см, 7 см), Масса 0,89 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KDS-AM/1RE-02	
Общее описание Ортез стабилизирует и разгружает коленный и голеностопный суставы, предотвращает опадание стопы; позволяет постепенно и под контролем увеличивать диапазон движений в коленном суставе; легко прилегает к конечности даже у людей с диспропорцией окружностей бедра и голени или при значительно утолщенном контуре коленного сустава. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач.	
Показания при тяжелой неустойчивости или дегенеративных изменениях коленного сустава в сочетании с парезом стопы (например, в стадии	

паралитической ишиалгии, болезнь Гейне Медина, SM) • при парезе нижних конечностей — в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов • в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики) у лиц с парезом стопы или всей нижней конечности • для профилактики и лечения контрактур коленного и голеностопного суставов, вызванных парезом или дегенеративными изменениями.			
Технические характеристики Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки: мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки: мин 30 см — макс 55 см			
Размер S Расстояние от колена до паха мин 27 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 34-45 см Длина стопы 22-23,5 см	Размер M Расстояние от колена до паха мин 31 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 40-51 см Длина стопы 24-25,5 см	Размер L Расстояние от колена до паха мин 34 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 42-54 см Длина стопы 26-27,5 см	Размер XL Расстояние от колена до паха мин 34 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 49-61 см Длина стопы 28-29,5 см

Габаритные размеры и масса

АМ-KDS-AM/1RE-02, Размер S	Д x Ш x Г (52 см, 28 см, 8 см), Масса 1,008 кг
АМ-KDS-AM/1RE-02, Размер M	Д x Ш x Г (56,5 см, 30 см, 8 см), Масса 1,085 кг
АМ-KDS-AM/1RE-02, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 32 см, 8 см), Масса 1,167 кг
АМ-KDS-AM/1RE-02, Размер XL	Д x Ш x Г (65,5 см, 34 см, 8 см), Масса 1,249 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-KDS-AM/2R	
Общее описание Основная особенность данной модели заключается в возможности постепенном увеличении нагрузки на колено и поддержки стопы. Модульная структура ортеза состоит из:	

- Бедренный модуль – текстильный рукав, обхватывающий большую часть бедра. Рукав оснащен полицентричными двухосными шинами, которые обеспечивают боковую иммобилизацию коленного сустава. Модуль оснащен фиксирующими ремнями на застежке Велкро (липучке)
- Модуль- голень, аналогичен бедренному. Шины модулей соединены в области коленного сустава механизмом с зубчатой передачей, который можно регулировать – увеличивая или уменьшая амплитуду подвижности. Такой механизм максимально соответствует анатомическому движению колена. Постепенный контроль нагрузки на сустав способствует ускорению процесса реабилитации и восстановлению двигательных функций.
- Шина голени анатомически правильно переходит в поддержку стопы в виде стремени. Регулировка длины осуществляется с помощью специальных креплений шины. Подложка под стопу изготовлена из углеволокна, который поглощает толчковую энергию, пружинит при ходьбе, что позволяет снять нагрузку с голеностопного сустава. Предотвращает провисание стопы.

Показания

- при тяжелой неустойчивости или дегенеративных изменениях коленного сустава в сочетании с парезом стопы (например, в стадии паралитической ишиалгии, болезнь Гейне Медина, SM)
- при парезе нижних конечностей — в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов
- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики) у лиц с парезом стопы или всей нижней конечности
- для профилактики и лечения контрактур коленного и голеностопного суставов, вызванных парезом или дегенеративными изменениями

Технические характеристики

Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки: мин 40 см — макс 75 см
 Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки: мин 30 см — макс 55 см



Размер S Расстояние от колена до паха мин 27 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 34-45 см Длина стопы 22-23,5 см	Размер M Расстояние от колена до паха мин 31 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 40-51 см Длина стопы 24-25,5 см	Размер L Расстояние от колена до паха мин 34 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 42-54 см Длина стопы 26-27,5 см	Размер XL Расстояние от колена до паха мин 34 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 49-61 см Длина стопы 28-29,5 см
--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

AM-KDS-AM/2R, Размер S	Д x Ш x Г (52 см, 28 см, 8 см), Масса 1,008 кг
AM-KDS-AM/2R, Размер M	Д x Ш x Г (56,5 см, 30 см, 8 см), Масса 1,085 кг
AM-KDS-AM/2R, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 32 см, 8 см), Масса 1,167 кг
AM-KDS-AM/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (65,5 см, 34 см, 8 см), Масса 1,249 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-KDS-AM/2R-02	
Общее описание Ортез стабилизирует и разгружает коленный и голеностопный суставы, предотвращает опадание стопы; позволяет постепенно и под контролем увеличивать диапазон движений в коленном суставе; легко прилегает к конечности даже у людей с диспропорцией окружностей бедра и голени или при значительно утолщенном контуре коленного сустава. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач. Ортез состоит из двух отделений рукавов, способствующих легкому наложению и прилеганию изделия к окружностям нижней конечности. Он оснащен также ортопедическими шинами 2R с системой их крепления и набором лент VELCRO. Показания - при тяжелой неустойчивости или дегенеративных изменениях коленного сустава в сочетании с парезом стопы (например, в стадии паралитической ишиалгии, болезнь Гейне Медина, SM) - при парезе нижних конечностей — в период вертикализации и учения ходьбе у больных	

неврологического и ортопедического отделов • в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики) у лиц с парезом стопы или всей нижней конечности • для профилактики и лечения контрактур коленного и голеностопного суставов, вызванных парезом или дегенеративными изменениями.			
Технические характеристики Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки: мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки: мин 30 см — макс 55 см			
Размер S Расстояние от колена до паха мин 27 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 34-45 см Длина стопы 22-23,5 см	Размер M Расстояние от колена до паха мин 31 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 40-51 см Длина стопы 24-25,5 см	Размер L Расстояние от колена до паха мин 34 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 42-54 см Длина стопы 26-27,5 см	Размер XL Расстояние от колена до паха мин 34 см Диапазон расстояний от колена до внешнего края стопы 49-61 см Длина стопы 28-29,5 см

Габаритные размеры и масса

АМ-KDS-AM/2R-02, Размер S	Д x Ш x Г (52 см, 28 см, 8 см), Масса 1,008 кг
АМ-KDS-AM/2R-02, Размер M	Д x Ш x Г (56,5 см, 30 см, 8 см), Масса 1,085 кг
АМ-KDS-AM/2R-02, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 32 см, 8 см), Масса 1,167 кг
АМ-KDS-AM/2R-02, Размер XL	Д x Ш x Г (65,5 см, 34 см, 8 см), Масса 1,249 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

OKD-09	
Общее описание Повязка OKD-09 имеет анатомическую форму и универсальный размер. Повязка на бедро стабилизирует и снимает тяжесть в точках крепления подвздошно-большеберцового тракта и четырехглавой мышцы бедра. Плавная регулировка ортеза дает возможность установить соответствующий уровень компрессии. Ортез также оснащен силиконовой системой	

микромассажа, которая воздействует на больное место при каждом движении и улучшает фиксирование ортеза на конечности. В результате действия ортеза улучшается клеточный метаболизм и кровообращение. Микромассаж также стимулирует активность клеток, клеточной и межклеточной жидкостей. Кроме того, увеличивается проницаемость клеточных мембран, высвобождаются коллагеновые волокна, активизируются молекулы жира и остаточные продукты метаболизма. Таким образом, наш ортез уменьшает воспалительный процесс и снимает тяжесть в области сухожилий и мышц, позволяя продолжать физическую активность.

Показания

- синдром подвздошно-большеберцового тракта (колени бегуна)

Технические характеристики

Размер Универсальный

Обхват колена над
коленной чашечкой
мин 33 см – макс 42,5 см

Размер X-Size

Обхват колена над
коленной чашечкой
мин 43 см – макс 53 см

Габаритные размеры и масса

OKD-09, Размер Универсальный	Д x Ш x Г (42 см, 28 см, 20 см), Масса 0,397 кг
OKD-09, Размер X-Size	Д x Ш x Г (50,5 см, 28 см, 20 см), Масса 0,464 кг

AS-KX-06

Общее описание

Не смотря на сложность конструкции, ортез прост в применении. Обеспечивая полную фиксацию коленного сустава, модель не нужно одевать через стопу. Для подгонки необходимого объема используются элементы на липучках и обводные ремни, расположенные в верхней и нижней части изделия.

Конструкция ортеза включает в себя съемные ортопедические шины на шарнирах, расположенные в боковых частях, что дает возможность снижать или увеличивать степень жесткости.

Показания

- Реабилитация после операций
- Ушибы и вывихи
- Растяжение связок
- Нестабильность коленного сустава боковая

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	

Габаритные размеры и масса


AS-KX-06, Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 21,5 см, 6 см), Масса 0,476 кг
AS-KX-06, Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 23,5 см, 6 см), Масса 0,541 кг
AS-KX-06, Размер L	Д x Ш x Г (32,5 см, 26 см, 6 см), Масса 0,615 кг
AS-KX-06, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 28,5 см, 6 см), Масса 0,689 кг
AS-KX-06, Размер XXL	Д x Ш x Г (39,5 см, 31 см, 6 см), Масса 0,771 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

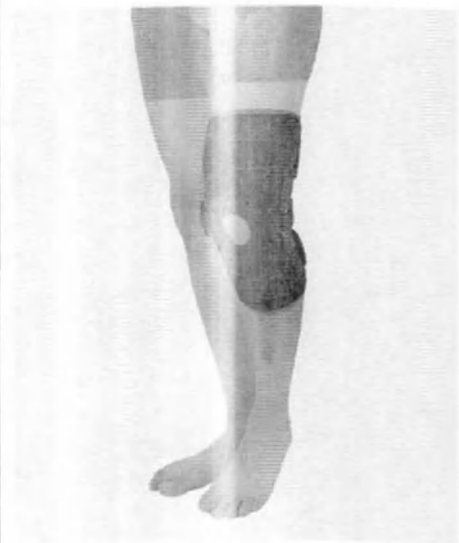AS-KX-05	
Общее описание Конструкция ортеза представляет собой дизайн, сочетающий в себе как функции открытых отрезков - легкость надевания изделия за счет отсутствия необходимости натягивать ортез через стопу, так и закрытые - полную стабилизацию коленной чашечки и коленного сустава. Для этого в изделии было установлено анатомически сформированное коленное кольцо. Ортез AS-KX-05 оснащен двумя наборами ремней и пластиковыми ручками ортопедических шин. В изделии используются двухосные полицентрические боковые направляющие шины с зубчатым механизмом. Движение сгибания и разгибания с помощью этих шин оптимально сближены анатомическому движению коленного сустава. Шины используются в ортезах коленного сустава в случае, если необходима большая боковая стабилизация сустава. Показания • вывих коленного сустава, • растяжения коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждения связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других оперативных процедур (ортопедия), • подвывих надколенника-привычный, посттравматический	

Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Окружность колена 30-34 см	Окружность колена 34,5-38 см	Окружность колена 38,5-42 см	Окружность колена 42,5-46 см	Окружность колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

AS-KX-05, Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 21 см, 5 см), Масса 0,454 кг
AS-KX-05, Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 23 см, 5 см), Масса 0,499 кг
AS-KX-05, Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 25 см, 5 см), Масса 0,548 кг
AS-KX-05, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 27 см, 5 см), Масса 0,597 кг
AS-KX-05, Размер XXL	Д x Ш x Г (40 см, 29 см, 5 см), Масса 0,651 кг

AS-KX-04	
Общее описание AS-KX-04 - короткий коленный ортез для предотвращения бокового (наиболее распространенного) вывиха коленной чашечки. Поддержка коленной чашечки осуществляется через мягкую боковую пелоту, оснащенную двумя независимыми кольцевыми лентами для установки выше и ниже колена. Кроме того, стабилизирующим элементом является регулируемая силиконовая пелота, точно устанавливающая и фиксирующая коленную чашечку. При сгибании и разгибании коленного сустава периферические ремни совместно с силиконовой пелотой правильно устанавливают коленную чашечку, уменьшая боль в колене. Для улучшения стабилизации коленного сустава в изделии использовались две спиральные боковые косточки. Показания - Боковой вывих надколенника (наиболее распространенный) травматический или привычный, - От легкой до умеренной боли в колене, - Нарушение траектории движения коленной чашечки. Технические характеристики	

Размер S Окружность колена 30-34 см	Размер M Окружность колена 34-38 см	Размер L Окружность колена 38-42 см	Размер XL Окружность колена 42-46 см	
---	---	---	--	--

Габаритные размеры и масса

AS-KX-04, Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 11 см, 4 см), Масса 0,135 кг
AS-KX-04, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 12,5 см, 4 см), Масса 0,150 кг
AS-KX-04, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 14 см, 4 см), Масса 0,167 кг
AS-KX-04, Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 15,5 см, 4 см), Масса 0,183 кг

AS-KX-08

Общее описание

Конструкция ортеза соединяет в себе как показатели открытых ортезов; (легкость надевания изделия — отсутствие необходимости надевать ортез через стопу), а также закрытых; (полная стабилизация надколенника и коленного сустава), с этой целью, в изделии было установлено кольцо анатомической формы для коленной чашечки.

Ортез оснащен четырьмя наборами обводных ремней и туннелей для монтажа ортопедических шин, что позволяет легко разобрать его перед стиркой.

Регулировка угла изгиба и разгибания осуществляется с помощью специальных заклепок каждые 20 градусов.

Шины оснащены специальными овальными крышками из пластика, которые предотвращают выпадение заклепок из угловых разъемов и защищают от нежелательной настройки механизма посторонними лицами.

Показания

- вывих колена
- растяжения колена,
- боковая коленная нестабильность,
- Травмы коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции связок коленного сустава,
- после других операций (ортопедия),
- подвывихи надколенника - привычные, травматические.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше	окружность бедра на 15 см выше	окружность бедра на 15 см выше	окружность бедра на 15 см выше	окружность бедра на 15 см выше

центра коленной чашечки 40-44 см окружност ь голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	центра коленной чашечки 44-48 см окружност ь голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	центра коленной чашечки 48-52 см окружност ь голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	центра коленной чашечки 52-56 см окружност ь голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	центра коленной чашечки 56-60 см окружност ь голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 46-50 см	
---	---	---	---	---	--

Габаритные размеры и масса

AS-KX-08, Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 21,5 см, 5 см), Масса 0,374 кг
AS-KX-08, Размер M	Д x Ш x Г (29,5 см, 24 см, 5 см), Масса 0,420 кг
AS-KX-08, Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 27 см, 5 см), Масса 0,472 кг
AS-KX-08, Размер XL	Д x Ш x Г (36,5 см, 30 см, 5 см), Масса 0,523 кг
AS-KX-08, Размер XXL	Д x Ш x Г (40,5 см, 33,5 см, 5 см), Масса 0,581 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AS-KX-07	
Общее описание Ортез имеет конструкцию, совмещающую функции открытых ортезов — простоту наложения благодаря тому, что его не нужно натягивать через стопу, как и закрытых — полная стабилизация надколенника и коленного сустава, для чего в ортезе имеется анатомической формы кольцо надколенника. Ортез открытый с тыльной стороны колена, что увеличивает комфорт. Ортез имеет два набора обводящих ремней и карманы для шин. В изделии применяются одноосные шины 1R из пластика, армированного углеволокном. Эти шины применяют в случаях, когда не нужна сильная боковая поддержка, но имеет значение меньший масса изделия. Регулировка угла сгибания производится при помощи специального имбусного ключа с шагом в 15°. Показания	

• вывихи коленного сустава, • растяжения связок колена, • боковая нестабильность коленного сустава, • травмы связок колена LCL, MCL и ACL, • реконструкция связок колена, • после других ортопедических операций, • подвывих надколенника (привычные, травматические).				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Окружность колена 30-34 см	Окружность колена 34-38 см	Окружность колена 38-42 см	Окружность колена 42-46 см	Окружность колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

AS-KX-07, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 17,5 см, 4,5 см), Масса 0,318 кг
AS-KX-07, Размер M	Д x Ш x Г (34 см, 19,5 см, 4,5 см), Масса 0,353 кг
AS-KX-07, Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 22 см, 4,5 см), Масса 0,392 кг
AS-KX-07, Размер XL	Д x Ш x Г (34 см, 24,5 см, 4,5 см), Масса 0,431 кг
AS-KX-07, Размер XXL	Д x Ш x Г (34 см, 27 см, 4,5 см), Масса 0,474 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AS-KX-01	
Общее описание Асимметричный односторонний ортез коленного сустава AS-KX-01 имеет регулировку диапазона подвижности с шагом в 15 градусов, две упругие ортопедические планшеты и одну ортопедическую шину с шарниром, имеющим регулировку угла сгибания и разгибания. На плечах шины есть ассиметричные разгрузочные пелоты, благодаря которым силы, воздействующие на конечность, распределяются, что увеличивает комфорт и стабильность. Застежка имеет специальный материал, облегчающий ее надевание. Ортез имеет отдельные ремни, так что его можно применять только с передними, или — если нужна большая стабилизация — с передними и задними. Внутри со стороны шины есть силиконовая подушечка, защищающая сустав. С внешней стороны	

вшиты 2 упругие вставки для улучшения стабилизации коленного сустава. Шина имеет шарнир с регулировкой угла сгибания и разгибания с шагом в 15°.

Показания

- остеоартрит коленного сустава, вальгусная или варусная деформация ног,
- нестабильность коленного сустава по ортопедическим или неврологическим причинам,
- после травм колена не требующих или не позволяющих операции (вывихи с повреждением боковых или крестообразных связок),
- надрыв креплений мышц,
- дегенеративные изменения,
- реабилитация,
- профилактика в спорте.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

AS-KX-01, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 14 см, 5 см), Масса 0,280 кг
AS-KX-01, Размер M	Д x Ш x Г (34 см, 16 см, 5 см), Масса 0,311 кг
AS-KX-01, Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 18 см, 5 см), Масса 0,346 кг
AS-KX-01, Размер XL	Д x Ш x Г (34 см, 20 см, 5 см), Масса 0,380 кг
AS-KX-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (34 см, 22 см, 5 см), Масса 0,418 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AS-KX-02	
Общее описание Асимметричный ортез коленного сустава AS-KX-02 имеет две боковые шины с регулировкой диапазона подвижности с шагом в 15°. Ортез имеет отдельные обводные ремни, что позволяет использовать его только с передними ремнями, а также, если требуется более жесткая стабилизация, - с передними и задними ремнями. На концах шин установлены асимметричные разгрузочные пелоты. Их использование приводит к	

распределению сил, действующих на конечность на большей площади, что делает использование ортеза более комфортным, а шины лучше устabilизироваными.

Показания

- остеоартрит коленного сустава, вальгусная или варусная деформация колена
- нестабильность колена по ортопедическим или неврологическим причинам
- после травмы колена, которая не требует или не позволяет на хирургическую операцию (вывихи с повреждением коллатеральных и крестообразных связок)
- при надрывах креплений мышц,
- дегенеративные изменения,
- в реабилитации,
- профилактически в спорте.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

AS-KX-02, Размер S	Д x Ш x Г (36,5 см, 17,5 см, 4 см), Масса 0,365 кг
AS-KX-02, Размер M	Д x Ш x Г (36,5 см, 19,5 см, 4 см), Масса 0,405 кг
AS-KX-02, Размер L	Д x Ш x Г (36,5 см, 22 см, 4 см), Масса 0,45 кг
AS-KX-02, Размер XL	Д x Ш x Г (36,5 см, 24,5 см, 4 см), Масса 0,495 кг
AS-KX-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (36,5 см, 27 см, 4 см), Масса 0,545 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AS-KX-03	
Общее описание При болях в колене может помочь активный ортез AS-KX-03. Он стабилизирует коленный сустав, уменьшает боль и помогает быстро мобилизоваться. Ортез приятный для кожи и удобный в использовании, анатомическая форма и петли облегчают надевание.	

Ортез подходит и на левую и на правую ногу. Имеется силиконовый вкладыш вокруг надколенника, благодаря которому ортез лучше стабилизирует надколенник и уменьшает боли мениска. В ортезе есть 2 боковые упругие вставки стабилизирующие коленный сустав. Показания Ортез можно применять в случае: • вывихов коленного сустава • растяжений связок • легкой боковой нестабильности сустава • легкой нестабильности коленной чашечки • профилактически в спорте. Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th></tr> <tr> <td>Обхват колена 30-34 см</td><td>Обхват колена 34-38 см</td><td>Обхват колена 38-42 см</td><td>Обхват колена 42-46 см</td><td>Обхват колена 46-50 см</td></tr> </table>					Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL										
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см										

Габаритные размеры и масса

AS-KX-03, Размер S	Д x Ш x Г (25,5 см, 10 см, 2,5 см), Масса 0,145 кг
AS-KX-03, Размер M	Д x Ш x Г (28,5 см, 11 см, 2,5 см), Масса 0,163 кг
AS-KX-03, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 12,5 см, 2,5 см), Масса 0,181 кг
AS-KX-03, Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,200 кг
AS-KX-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (38,5 см, 15,5 см, 2,5 см), Масса 0,223 кг

U-SK	
Общее описание Наколенник U-SK относится к группе 4CLASSIC и является изделием универсальным. Он выполнен из трехслойного материала, состоящего из внешней эластичной ткани из полиамида, имеющей свойства липучки, внутреннего слоя из неопреновой пенки, а также эластичной махровой подкладки изнутри. Материал характеризуется мягкостью и высокой эластичностью. Он не имеет грубых волокон, не натирает кожу. Показания • При дегенеративных изменениях колена и	

коленной чашечки (хондромалиция коленной чашечки) • При болезненных состояниях коленного сустава на фоне дегенеративных изменений и после травм • При разрыве связок и мышц в области коленного сустава • Профилактически в спорте — выполняет защитную функцию при контактных видах спорта.		
Технические характеристики		
Размер Универсальный Обхват колена мин 30 — макс 43 см		Размер X-Size Обхват колена мин 43,5 — макс 55 см

Габаритные размеры и масса

U-SK. Размер Универсальный	Д x Ш x Г (26 см, 20 см, 2 см), Масса 0,175 кг
U-SK. Размер X-Size	Д x Ш x Г (26 см, 25 см, 2 см), Масса 0,205 кг

AM-OSK-Z				
Общее описание Ортез надколенника AM-OSK-Z имеет специальную конструкцию, которая стабилизирует и разгружает надколенно-бедренный сустав и связки надколенника. В ортезе применили стабилизирующее кольцо на коленную чашечку, которое ее дополнительно стабилизирует во время использования. Кроме того — заднюю натяжную систему и 2 передние системы дополнительно стабилизирующие надколенно-бедренный сустав. Благодаря пряжкам из полиамида и системе застёжек можно плавно устанавливать силу воздействия ортеза на коленный сустав. Кольцо на коленную чашечку позиционирует ее в своей оси предохраняя от патологического смещения надколенника.				
Показания • привычный вывих надколенника • перелом надколенника • пателлофemorальная нестабильность • хондромалиция надколенника • боль в надколенно-бедренном суставе • артроз.				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена



30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см	46,5-50 см	
----------	------------	------------	------------	------------	--

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z, Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 15,5 см, 3,5 см), Масса 0,112 кг
AM-OSK-Z, Размер M	Д x Ш x Г (20 см, 17,5 см, 3,5 см), Масса 0,124 кг
AM-OSK-Z, Размер L	Д x Ш x Г (20 см, 19,5 см, 3,5 см), Масса 0,138 кг
AM-OSK-Z, Размер XL	Д x Ш x Г (20 см, 21,5 см, 3,5 см), Масса 0,152 кг
AM-OSK-Z, Размер XXL	Д x Ш x Г (20 см, 23,5 см, 3,5 см), Масса 0,167 кг

AM-OSK-Z/P

Общее описание

Ортез стабилизирует сустав и коленную чашечку, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач.

Показания

- после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением связок)
- при нестабильности сустава (боковой или центральной)
- при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях
- после перенесенных операций при долечивании коленного сустава
- профилактически в спорте — выполняет защитную функцию.




Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
----------	----------	----------	-----------	------------	------------	------------

Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/P, Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 15,5 см, 3,5 см), Масса 0,112 кг
AM-OSK-Z/P, Размер M	Д x Ш x Г (20 см, 17,5 см, 3,5 см), Масса 0,124 кг
AM-OSK-Z/P, Размер L	Д x Ш x Г (20 см, 19,5 см, 3,5 см), Масса 0,138 кг
AM-OSK-Z/P, Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 21,5 см, 3,5 см), Масса 0,152 кг
AM-OSK-Z/P, Размер 2XL	Д x Ш x Г (23 см, 23,5 см, 3,5 см), Масса 0,167 кг
AM-OSK-Z/P, Размер 3XL	Д x Ш x Г (26 см, 26 см, 3,5 см), Масса 0,184 кг
AM-OSK-Z/P, Размер 4XL	Д x Ш x Г (26 см, 28,5 см, 3,5 см), Масса 0,202 кг

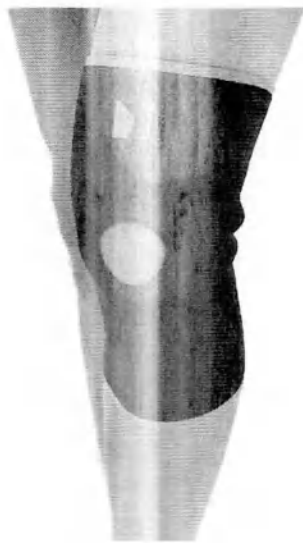AM-OSK-Z/S	
Общее описание Ортез закрытого типа, выполненный из перфорированной неопреновой пены, двусторонне покрытой облицовочной тканью. Изделие идеально пропускает влагу, благодаря применению внутренней перфорации, которая позволяет коже свободно дышать. В наколеннике применили стабилизирующее кольцо на коленную чашечку, которое ее дополнительно стабилизирует во время использования. Показания • В ранних дегенеративных состояниях (ревматология), • незначительной неустойчивости колена, • в периоде выздоровления (реабилитация), • предупреждения контузии у спортсменов, вывихов коленного сустава. • При долечивании после травм и контузий, • при необходимости усиления переднезадней стабилизации колена, • обычных и посттравматических вывихах коленной чашечки. Технические характеристики	

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/S, Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 17 см, 3 см), Масса 0,123 кг
AM-OSK-Z/S, Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 19 см, 3 см), Масса 0,132 кг
AM-OSK-Z/S, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 3 см), Масса 0,147 кг
AM-OSK-Z/S, Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 23 см, 3 см), Масса 0,157 кг
AM-OSK-Z/S, Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 25 см, 3 см), Масса 0,168 кг

AM-OSK-Z/S-P

Общее описание

Ортез закрытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон специальной тканью. Получено превосходное выведение влаги наружу ортеза с помощью применения внутренней перфорации, которая также позволяет коже свободно дышать. Кроме того, в изделии было использовано:

1. стабилизирующее кольцо на коленную чашечку, который дополнительно стабилизирует ее во время использования,
2. эластичные боковые китовые усы.

Показания

Ортез можно использовать в случаях:

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)
- предотвращения: травм, посттравматических вывихов коленного сустава и предрасположенности к ним.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/S-P, Размер S	Д x Ш x Г (29 см, 21 см, 3 см), Масса 0,152 кг
AM-OSK-Z/S-P, Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 21 см, 3 см), Масса 0,164 кг
AM-OSK-Z/S-P, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 3 см), Масса 0,182 кг
AM-OSK-Z/S-P, Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 3 см), Масса 0,195 кг
AM-OSK-Z/S-P, Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 3 см), Масса 0,208 кг

AM-OSK-Z/S-X														
Общее описание Бандаж колена закрытого типа AM-OSK-Z/S-X является медицинским изделием, служащим для реабилитации коленного сустава. Благодаря применению системы, основанной на внутренней перфорации мягкого элемента ортеза, охраняемый сустав естественно вентилируется, а кожа под ним свободно дышит. Изделие оснащено независимыми группами лент VELCRO, эластичными китовыми усами, анатомически профилируемыми кольцами, стабилизирующими коленную чашечку, а также удобной застежкой крест-накрест. Показания • после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением связок) • при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях • при устойчивых дегенеративных изменениях в области коленной чашечки (после перенесенных переломов, в хондромалиции чашечки, при вывихе чашечки) • при дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава • после перенесенных операций при долечивании коленного сустава • профилактически в спорте — выполняет защитную функцию. Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th></tr> <tr> <td>Обхват колена 30-34 см</td><td>Обхват колена 34-38 см</td><td>Обхват колена 38-42 см</td><td>Обхват колена 42-46 см</td><td>Обхват колена 46-50 см</td></tr> </table>					Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL										
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см										
														

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/S-X, Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 16 см, 3 см), Масса 0,127 кг
------------------------	--

AM-OSK-Z/S-X, Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 18 см, 3 см), Масса 0,137 кг
AM-OSK-Z/S-X, Размер L	Д x Ш x Г (31 см, 20 см, 3 см), Масса 0,152 кг
AM-OSK-Z/S-X, Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 22 см, 3 см), Масса 0,163 кг
AM-OSK-Z/S-X, Размер XXL	Д x Ш x Г (31 см, 24 см, 3 см), Масса 0,174 кг

R4M-SK

Общее описание

Коленный бандаж относится к группе ULTRA BREATHING. В качестве основного волокна используется полиэстер. Ортез разгружает мышечные соединения и оказывает обезболивающее действие, поддерживая стабильное сжатие.

Показания

- перегрузки коленного сустава,
- растяжения коленного сустава,
- вывих коленного сустава,
- легкая боковая нестабильность колена

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см



Габаритные размеры и масса

R4M-SK, Размер S	Д x Ш x Г (19,5 см, 14 см, 1 см), Масса 0,470 кг
R4M-SK, Размер M	Д x Ш x Г (21,5 см, 15,5 см, 1 см), Масса 0,522 кг
R4M-SK, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 17 см, 1 см), Масса 0,58 кг
R4M-SK, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 19 см, 1 см), Масса 0,638 кг

R4M-SK/F

Общее описание

Коленный бандаж относится к группе ULTRA BREATHING. В качестве основного волокна используется полиэстер. Ортез снабжен эластичными боковыми косточками, благодаря чему стабилизирует боковой коленный сустав. Кроме того, он разгружает мышечные соединения и оказывает обезболивающее действие, поддерживая стабильное сжатие.

Показания

- перегрузки коленного сустава,
- растяжения коленного сустава,



• вывих коленного сустава, • легкая боковая нестабильность колена			
Технические характеристики			
Размер S Обхват колена 30-34 см	Размер M Обхват колена 34-38 см	Размер L Обхват колена 38-42 см	Размер XL Обхват колена 42-46 см

Габаритные размеры и масса

R4M-SK/F, Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 15,5 см, 1 см), Масса 0,079 кг
R4M-SK/F, Размер M	Д x Ш x Г (22,5 см, 17 см, 1 см), Масса 0,088 кг
R4M-SK/F, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 19 см, 1 см), Масса 0,098 кг
R4M-SK/F, Размер XL	Д x Ш x Г (27,5 см, 21 см, 1 см), Масса 0,108 кг

AS-SK					
Общее описание Это активный ортез для разгрузки и стабилизации коленного сустава в случае его нестабильности, отека или болей в колене. Ортез стабилизирует сбоку коленный сустав, разгружает крепления мышц; благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшает отеки, способствует рассасыванию гематом вследствие перенесенных травм. Это позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач.					
Показания • После перенесенных травм коленного сустава, не требующих иммобилизации коленного сустава (вывихах с повреждением боковых связок, при надрывах мышечных креплений) • При комплексных посттравматических болях коленного сустава, при воспалительных и дегенеративных изменениях • При умеренно тяжелых дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава • Для профилактики в занятиях спортом — ортез выполняет защитную функцию в контактных видах спорта					
Технические характеристики					
Размер S Обхват	Размер M Обхват	Размер L Обхват	Размер XL Обхват	Размер XXL Обхват	Размер XXXL

колена 30-34 см	колена 34,5-38 см	колена 38,5-42 см	колена 42,5-46 см	колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-54 см
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------

Габаритные размеры и масса

AS-SK, Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 16 см, 3 см), Масса 0,132 кг
AS-SK, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 18 см, 3 см), Масса 0,142 кг
AS-SK, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 20 см, 3 см), Масса 0,153 кг
AS-SK, Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 22 см, 3 см), Масса 0,164 кг
AS-SK, Размер XXL	Д x Ш x Г (23 см, 24 см, 3 см), Масса 0,175 кг
AS-SK, Размер XXXL	Д x Ш x Г (23 см, 26,5 см, 3 см), Масса 0,187 кг

AS-SK-01				
Общее описание Ортез стабилизирует сбоку коленный сустав, разгружает крепления мышц; благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии, он имеет болеутоляющее действие, уменьшает отеки, способствует рассасыванию выпотов и гематом вследствие перенесенных травм. Это позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач.				
Показания • После перенесенных травм коленного сустава, не требующих иммобилизации коленного сустава (вывихах с повреждением боковых связок, при надрывах мышечных креплений) • При комплексных посттравматических болях коленного сустава, при воспалительных и дегенеративных изменениях • При умеренно тяжелых дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава • Для профилактики при занятиях спортом — ортез выполняет защитную функцию в контактных видах спорта.				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	

Габаритные размеры и масса

AS-SK-01, Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 14 см, 7 см), Масса 0,118 кг
AS-SK-01, Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 15,5 см, 7 см), Масса 0,126 кг
AS-SK-01, Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 17 см, 7 см), Масса 0,136 кг
AS-SK-01, Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 18,5 см, 7 см), Масса 0,146 кг

AS-SK-02					
Общее описание Ортез стабилизирует коленную чашечку, разгружает надколенно-бедренный сустав и связки, разгружает мышечные крепления коленного сустава; благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшающее отеки; способствует рассасыванию гематом вследствие перенесенных травм. Это позволяет быстрее вернуться к тренировкам. Выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Показания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач. Показания • после перенесенных травм сустава, которые лечат традиционным и хирургическим методами (после переломов коленной чашечки, надрывов креплений четырехглавой мышцы; после повреждений связки коленной чашечки) • при дегенеративных изменениях сустава • при комплексных посттравматических болях коленного сустава, при воспалительных и дегенеративных изменениях • после лечения консервативным и хирургическим методами переломов коленной чашечки • при умеренно тяжелых дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава					
Технические характеристики					
Размер S Обхват колена 30-34 см	Размер M Обхват колена 34,5-38 см	Размер L Обхват колена 38,5-42 см	Размер XL Обхват колена 42,5-46 см	Размер XXL Обхват колена 46,5-50 см	Размер XXXL Обхват колена 50,5-54 см

Габаритные размеры и масса

AS-SK-02, Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 15,5 см, 3 см), Масса 0,063 кг
AS-SK-02, Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 17 см, 3 см), Масса 0,068 кг


AS-SK-02, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 19 см, 3 см), Масса 0,073 кг
AS-SK-02, Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 21 см, 3 см), Масса 0,078 кг
AS-SK-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (16 см, 23 см, 3 см), Масса 0,083 кг
AS-SK-02, Размер XXXL	Д x Ш x Г (16 см, 25 см, 3 см), Масса 0,089 кг

AS-SK/F						
Общее описание Бандаж колена AS-SK/F относится к группе 4SPORT. Стабилизирует коленный сустав и коленную чашечку, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам и повседневным занятиям. Выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Показания и применение определяет лечащий врач.						
Показания • после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением боковых связок) • при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, и дегенеративных изменениях • при дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава • профилактически — выполняет защитную функцию в контактных видах спорта.						
Технические характеристики						
Размер S Обхват колена 30-34 см	Размер M Обхват колена 34,5-38 см	Размер L Обхват колена 38,5-42 см	Размер XL Обхват колена 42,5-46 см	Размер XXL Обхват колена 46,5-50 см	Размер XXXL Обхват колена 50,5-54 см	

Габаритные размеры и масса


AS-SK/F, Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 14,5 см, 3 см), Масса 0,185 кг
AS-SK/F, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 16 см, 3 см), Масса 0,199 кг
AS-SK/F, Размер L	Д x Ш x Г (26,5 см, 18 см, 3 см), Масса 0,221 кг
AS-SK/F, Размер XL	Д x Ш x Г (26,5 см, 20 см, 3 см), Масса 0,236 кг
AS-SK/F, Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 22 см, 3 см), Масса 0,260 кг

AS-SK/F, Размер XXXL	Д x Ш x Г (28 см, 14 см, 3 см), Масса 0,278 кг
----------------------	--

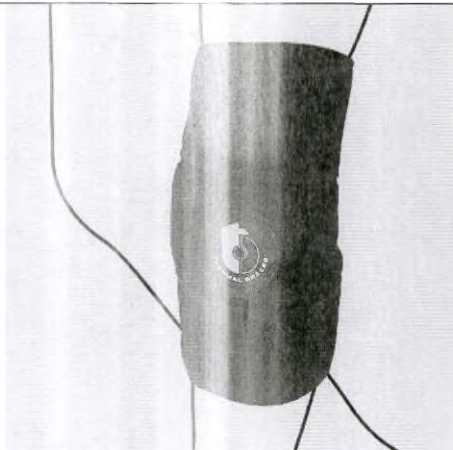ТВ-04 с клапаном для льда	
Общее описание Дробленый лед, помещенный в специальный мешок, обеспечивает эффективную терапию холодом, устраняя болевые ощущения и уменьшая воспаление. Открытая неопреновая конструкция ортеза и клапан для отвода воздуха обеспечивают идеальное прилегание мешка со льдом к области коленного сустава, окутывая его низкой температурой и создавая тем самым мгновенную "холодную повязку". Показания • растяжение колена, вывих колена, • повреждение связок (ACL, PCL, MCL, LCL), • колено прыгуна, • колено киномана, • боковые поддержки коленной чашечки, • вывих надколенника, • повреждение мениска, • хондромалиция коленной чашечки, • колено бегуна, • нестабильность коленного сустава • остеоартроз (ОА), • после операций (артроскопия колена) Технические характеристики Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

ТВ-04 с клапаном для льда, Размер универсальный	Д x Ш x Г (30 см, 19 см, 4 см), Масса 0,312 кг
---	--

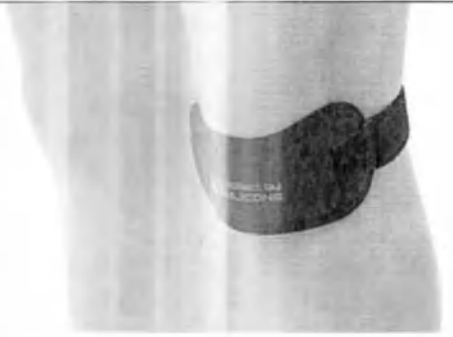AS-P/RZ	
Общее описание Спортивный ортез под коленную чашечку фиксирует и разгружает коленную чашечку, уменьшает нагрузку на связку надколенника – уменьшает воздействие четырехглавой мышцы на мыщелок большеберцовой кости. Это позволяет быстрее вернуться к работе и тренировкам. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач. В ортезе имеется силиконовая пелота (подушечка), предназначенная для разгрузки связок надколенника, а	

также обтягивающий ремешок с пластиковой скобкой, надежно фиксирующий изделие на конечности.

Показания

- при надрывах мышечных креплений в области коленного сустава
- при предрасположенности к вывихам
- при стерильном некрозе бугристости большеберцовой кости
- при дегенеративных изменениях сустава (хондромалиция коленной чашечки)
- после лечения консервативным и хирургическим методами переломов.

Технические характеристики

Размер универсальный

Обхват под коленом мин 26 см — макс 42 см

Габаритные размеры и масса

AS-P/RZ, Размер универсальный

Д x Ш x Г (7 см, 15 см, 3 см), Масса 0,15 кг

ЕВ-P/RZ

Общее описание

Мягкая поддержка предотвращает перегрузку связок и мышц при физической нагрузке, снимает болевой синдром и ускоряет реабилитацию. Ортез универсален (на левую и правую ногу), прост в использовании и не требует особых усилий по уходу.

Модель включает в себя:

- Силиконовую пелоту анатомической формы
- Текстильный карман для пелоты
- Фиксирующий ремень

Показания

- На заключительном этапе лечения после травм колена
- Для профилактики развития заболеваний коленного сустава
- Как средство поддержки для ослабленных мышц и связок

Технические характеристики

Размер универсальный

Обхват под коленом мин 26 см — макс 42 см



Габаритные размеры и масса

U-SK-01

Общее описание

Наколенник U-SK-01 относится к группе 4CLASSIC и является изделием универсальным, безразмерным. Оснащен анатомически профилируемым кольцом, стабилизирующим коленную чашечку, а также лентой VELCRO.

Стабилизирует и одновременно разгружает коленную чашечку; стабилизирует коленный сустав сбоку, разгружает мышцы и связки; благодаря поддержанию постоянной температуры и эластичному угнетению обезбавляет и уменьшает опухоли; облегчает впитывание жидкостей и кровоподтеков после перенесенных травм. Делает возможным более быстрое восстановление физической формы и возвращение к спорту.

Показания

- при дегенеративных изменениях колена и коленной чашечки (хондромалиция коленной чашечки)
- при разрыве связок и мышц в области коленного сустава
- при вывихах и смещениях коленной чашечки
- при болезненных состояниях коленного сустава после перенесенных травм
- при омертвлении бугристости большеберцовой кости
- после переломов коленной чашечки, леченных путем хирургического вмешательства
- при умеренной продолжительной нестабильности сустава
- профилактически в спорте — выполняет защитную функцию при контактных видах спорта.

Технические характеристики**Размер Универсальный**


Обхват колена

мин 30 — макс 43 см

Размер X-Size

Обхват колена

мин 43,5 — макс 55 см

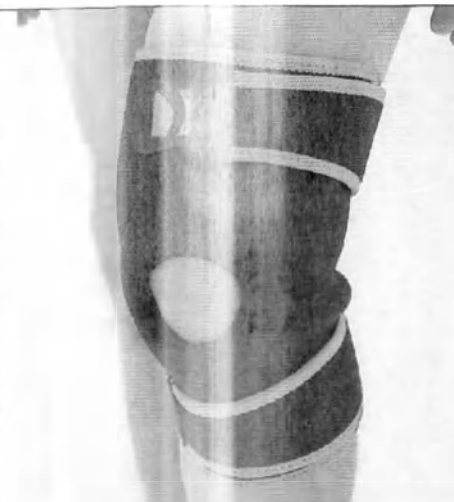**Габаритные размеры и масса**


U-SK-01, Размер Универсальный	Д х Ш х Г (27 см, 21,5 см, 3 см), Масса 0,535 кг
U-SK-01, Размер X-Size	Д х Ш х Г (27 см, 27,5 см, 3 см), Масса 0,626 кг

U-SK-02

Общее описание

Наколенник U-SK-02 относится к группе 4CLASSIC и является изделием универсальным, безразмерным. Оснащен анатомически профилируемым кольцом, стабилизирующим коленную чашечку, а также лентой VELCRO, позволяющими подогнать изделие к конечности пациента. Универсальный продукт для левого и правого колена.

Стабилизирует и одновременно разгружает коленную чашечку; разгружает мышцы и связки в области колена; благодаря поддержанию постоянной температуры и эластичному угнетению обезболивает и уменьшает опухоли; облегчает впитывание жидкостей и кровоподтеков после перенесенных травм. Делает возможным более быстрое восстановление физической формы и возвращение к спорту.

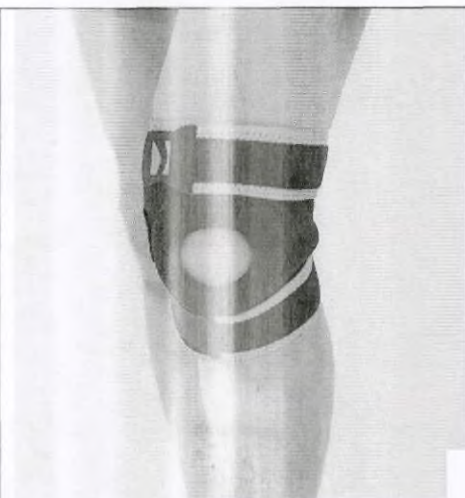

Показания

- при вывихах и смещениях коленной чашечки
- при омертвлении бугристости берцовой кости
- при дегенеративных изменениях колена и коленной чашечки (хондромалиция коленной чашечки)
- при разрыве связок и мышц в области коленного сустава
- при болезненных состояниях коленного сустава после перенесенных травм
- после переломов коленной чашечки, леченных путем хирургического вмешательства
- профилактически в спорте — выполняет защитную функцию при контактных видах спорта.

Технические характеристики

Размер Универсальный

Обхват колена

мин 30 — макс 43 см

Размер X-Size

Обхват колена

мин 43,5 — макс 55 см

Габаритные размеры и масса

U-SK-02, Размер Универсальный	Д x Ш x Г (20 см, 23 см, 3 см), Масса 0,57 кг
U-SK-02, Размер X-Size	Д x Ш x Г (21 см, 29 см, 3 см), Масса 0,69 кг

AM-KDX-02

Общее описание

Ортез АМ-KDX-02 окружает коленную чашечку, удерживая ее на оси сустава. Предотвращает вывих и неправильное его выравнивание. Кроме того, ортез эффективно снимает давление с коленного сустава, уменьшая боль в передней части колена.

Ортез обеспечивает терапевтическое сжатие, помогает уменьшить экссудаты и гематомы. Стабилизирует надколенно-бедренный сустав, предотвращает перегрузки и повреждения. Он также поддерживает конечность после травмы, уменьшает воспаление и улучшает процессы заживления.

**Показания**

- Боковой вывих коленной чашечки
- Нестабильность коленной чашечки
- Легкая нестабильность коленного сустава
- Слабость медиальной головки четырехглавой мышцы бедра
- Болезненность коленно-бедренного сустава
- Нарушение оси коленного сустава
- Привычные и посттравматические подвывихи коленной чашечки
- Профилактически в спорте

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

АМ-KDX-02, Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 14 см, 2 см), Масса 0,072 кг
АМ-KDX-02, Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 15,5 см, 2 см), Масса 0,077 кг
АМ-KDX-02, Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 17 см, 2 см), Масса 0,083 кг
АМ-KDX-02, Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 19 см, 2 см), Масса 0,089 кг
АМ-KDX-02, Размер 2XL	Д x Ш x Г (14 см, 20,5 см, 2 см), Масса 0,095 кг

АМ-KDX-03**Общее описание**

Модель коленного ортеза АМ-KDX-03 сочетает в себе свойства профилактических и лечебных ортопедических средств. А эффективная стабилизация коленного сустава в лобной и сагиттальной плоскости дает возможность восстановить колено после травм в ускоренном порядке.

Ортез относится к закрытому типу и включает в себя следующие элементы:

- Основа – текстильный рукав.
- Открытая область надколенника усилена двойным слоем полиуретановой пены, которая усиливает стабилизацию в лобной плоскости.
- Боковые ортопедические шины, соединенные шарнирным механизмом, обеспечивают защиту от перегрузки, переразгибания и стабилизируют сустав по бокам.
- Фиксирующие ремни и клапаны на застежке Велкро.



Показания

- травмы менисков
- вывихов коленного сустава,
- растяжения связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- травмы связок колена LCL, MCL и ACL,
- после артроскопии коленного сустава
- профилактика в спорте

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

АМ-KDX-03, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 20 см, 4 см), Масса 0,407 кг
АМ-KDX-03, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 22,5 см, 4 см), Масса 0,437 кг
АМ-KDX-03, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 4 см), Масса 0,47 кг
АМ-KDX-03, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 27,5 см, 4 см), Масса 0,503 кг
АМ-KDX-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 30 см, 4 см), Масса 0,538 кг
АМ-KDX-03, Размер XXXL	Д x Ш x Г (36 см, 34 см, 4 см), Масса 0,576 кг
АМ-KDX-03, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (36 см, 36,5 см, 4 см), Масса 0,616 кг

IB-SK/A

Общее описание

Бандаж открытого типа IB-SK/A является медицинским изделием, исправляющим походку и служащим для реабилитации поврежденного сустава. Изделие оснащено двумя независимыми группами усиливающих ремней, лентами VELCRO, а также эластичными боковыми шинами.

В изделии применены эластичные боковые шины. Они имеют конструкцию рессор, изготовлены из металлопластика.

Показания

- вывиха колена
- растяжения связок колена
- боковая нестабильность коленного сустава
- травмы связок колена (LCL, MCL и ACL),
- после реконструкции коленных связок,
- после другой операции (ортопедия).

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см



Габаритные размеры и масса

IB-SK/A, Размер S	Д х Ш х Г (36,5 см, 19,5 см, 4 см), Масса 0,388 кг
IB-SK/A, Размер M	Д х Ш х Г (36,5 см, 21,5 см, 4 см), Масса 0,418 кг
IB-SK/A, Размер L	Д х Ш х Г (36,5 см, 24 см, 4 см), Масса 0,449 кг
IB-SK/A, Размер XL	Д х Ш х Г (36,5 см, 26,5 см, 4 см), Масса 0,480 кг
IB-SK/A, Размер 2XL	Д х Ш х Г (36,5 см, 29 см, 4 см), Масса 0,514 кг

RAPTOR/2R

Общее описание

В ортезе установлены пять стабилизирующих ремней, оснащенных силиконовыми антискользящими подушками, которые обеспечивают дополнительную поддержку и предотвращают скольжение ортеза на конечности.

Ортез стабилизирует сустав в сагиттальной и лобной плоскостях. Ортез имеет 4-точечную систему поддержки, которая стабилизирует и разгружает коленный сустав. В случае поврежденной задней крестообразной связки (PCL) большеберцовая кость имеет тенденцию к чрезмерному движению в заднем направлении относительно бедренной кости. Конструкция переднезаднего ортеза позволяет закрепить голень и расположить ее на оси коленного сустава.



Показания

- Нестабильность PCL
- Повреждение / разрыв PCL
- Повреждение / разрыв ACL
- Нестабильность MCL / LCL / ACL.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
окружность бедр на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см	окружность бедр на 15 см выше центра коленной чашечки 44,5–48 см	окружность бедр на 15 см выше центра коленной чашечки 48,5–52 см	окружность бедр на 15 см выше центра коленной чашечки 52,5–56 см
окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5–38 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5–42 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5–46 см

Габаритные размеры и масса

RAPTOR/2R, Размер S	Д x Ш x Г (41 см, 15 см, 13 см), Масса 0,600 кг
RAPTOR/2R, Размер M	Д x Ш x Г (41 см, 16 см, 13 см), Масса 0,645 кг
RAPTOR/2R, Размер L	Д x Ш x Г (41 см, 17,5 см, 13 см), Масса 0,694 кг
RAPTOR/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (41 см, 19 см, 13 см), Масса 0,743 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

ЕВ-SK/P														
Общее описание Ортез представляет собой комбинацию ортопедического текстиля с встроенными жесткими элементами. Ортез имеет открытую зону надколенника, усиленную стабилизирующим кольцом из дополнительного слоя пены. Фиксация на ноге осуществляется с помощью ленточных ремней с застежкой липучкой, что позволяет регулировать объем и уровень компрессии. Жесткие элементы конструкции включают в себя: • Боковые ортопедические шины с защитным покрытием от агрессивного воздействия влаги. • Механизм контроля разгибания сустава. Показания Ортез предназначен для: • Коррекции походки при гиперэкстензии • Сильной стабилизации коленного сустава • Устранения тенденции к избыточности разгибания Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th></tr> <tr> <td>Обхват колена 30-34 см</td><td>Обхват колена 34-38 см</td><td>Обхват колена 38-42 см</td><td>Обхват колена 42-46 см</td><td>Обхват колена 46-50 см</td></tr> </table>					Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL										
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см										
														

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SK/P, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 16 см, 5 см), Масса 0,422 кг
ЕВ-SK/P, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 18 см, 5 см), Масса 0,454 кг
ЕВ-SK/P, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 20 см, 5 см), Масса 0,488 кг
ЕВ-SK/P, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 5 см), Масса 0,522 кг
ЕВ-SK/P, Размер XXL	Д x Ш x Г (37 см, 24 см, 5 см), Масса 0,559 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

IB-SK/2RA

Общее описание

Ортез открытого типа IB-SK/2RA является медицинским изделием для повышения работоспособности и походки, используемым для реабилитации поврежденного коленного сустава. Изделие оснащено двумя независимыми узлами усилительных ремней VELCRO и одноосными боковыми шинами.

Ортез оснащен двумя контурными силиконовыми пелотами, которые укрепляют и стабилизируют коленную чашечку.

Изделие снабжено ремнями на липучках, концы которых снабжены пластиковыми краями, облегчающими использование изделия.



Показания

- после перенесенных травм, не требующих иммобилизации коленного сустава (растяжений с повреждением коллатеральных связок, при надрывах мышечных соединений)
- при хронической нестабильности коленного сустава (боковой или медиальной)
- при болевых синдромах коленного сустава после перенесенных травм и в ходе дегенеративных изменений
- после хирургического лечения коленного сустава по травматическим и болезненным причинам
- пассивная борьба с контрактурами в коленном суставе

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

IB-SK/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 18 см, 5 см), Масса 0,382 кг
IB-SK/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (33,5 см, 20 см, 5 см), Масса 0,424 кг
IB-SK/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 5 см), Масса 0,471 кг
IB-SK/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (40,5 см, 24 см, 5 см), Масса 0,518 кг
IB-SK/2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 26,5 см, 5 см), Масса 0,569 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

IB-SK/1R				
Общее описание Ортез открытого типа IB-SK/1R – это медицинское изделие, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Изделие оснащено двумя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO и односмычными боковыми шинами, длиной 280 мм. Они изготовлены из пластика с добавлением углеродных волокон; регулировка угла сгибания и разгибания происходит с помощью специальных заклепок каждые 15 градусов.				
Показания • после консервативного и оперативного лечения травм коленного сустава • при дегенеративных изменениях и нестабильности сустава вследствие перенесенных травм или болезней у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему. • при неустойчивости сустава и умеренно тяжелых дегенеративных изменениях • при парезе нижних конечностей для вертикализации и учения ходьбе • при болезнях требующих периодического обездвижения или ограничения диапазона движений в суставе.				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см



Габаритные размеры и масса

IB-SK/1R, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 18 см, 5 см), Масса 0,382 кг
IB-SK/1R, Размер M	Д x Ш x Г (33,5 см, 20 см, 5 см), Масса 0,424 кг
IB-SK/1R, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 5 см), Масса 0,471 кг
IB-SK/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (40,5 см, 24 см, 5 см), Масса 0,518 кг
IB-SK/1R, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 26,5 см, 5 см), Масса 0,569 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.
Шаг регулировки: 15 градусов.

IB-SKL/2RA

Общее описание

Длинный ортез открытого типа IB-SKL/2RA является медицинским изделием для повышения работоспособности и походки, используемым для реабилитации повреждений коленного сустава. Изделие оснащено четырьмя независимыми командами укрепляющих ремней, выполненных из лент VELCRO и две двухосные анатомические боковые шины, которые при сгибании точно отражают движение происходящие в коленном суставе, который во время эксплуатации не изменяет своего положения относительно оси коленного сустава.

Благодаря двум анатомическим шинам 2ra Precision обеспечивает блокировку защиты от перенапряжения, блокировку угла изгиба на 30, 55, 75, 95 и 110 градусов и разгибания на 15 и 75 градусов. Эти шины позволяют бороться с контрактурами в суставе и пассивно помогают процессу реабилитации.

Ортез оснащен двумя контурными силиконовыми пелотами, которые укрепляют и стабилизируют коленную чашечку.

Показания

- после перенесенных травм, не требующих иммобилизации коленного сустава (растяжений с повреждением коллатеральных связок, при надрывах мышечных соединений)
- при хронической нестабильности коленного сустава (боковой или медиальной)
- при болевых синдромах коленного сустава после перенесенных травм и в ходе дегенеративных изменений
- после хирургического лечения коленного сустава по травматическим и болезненным причинам
- пассивная борьба с контрактурами в коленном суставе

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки
40–44 см	44–48 см	48–52 см	52–56 см	56–60 см
окружность голени 15 см ниже центра	окружность голени 15 см ниже центра	окружность голени 15 см ниже центра	окружность голени 15 см ниже центра	окружность голени 15 см ниже центра

коленной чашечки 30-34 см	коленной чашечки 34-38 см	коленной чашечки 38-42 см	коленной чашечки 42-46 см	коленной чашечки 46-50 см
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Габаритные размеры и масса


IB-SKL/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (45,5 см, 22 см, 7 см), Масса 0,581 кг
IB-SKL/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (45,5 см, 24 см, 7 см), Масса 0,625 кг
IB-SKL/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (45,5 см, 26 см, 7 см), Масса 0,672 кг
IB-SKL/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (45,5 см, 28 см, 7 см), Масса 0,719 кг
IB-SKL/2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (45,5 см, 30 см, 7 см), Масса 0,769 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

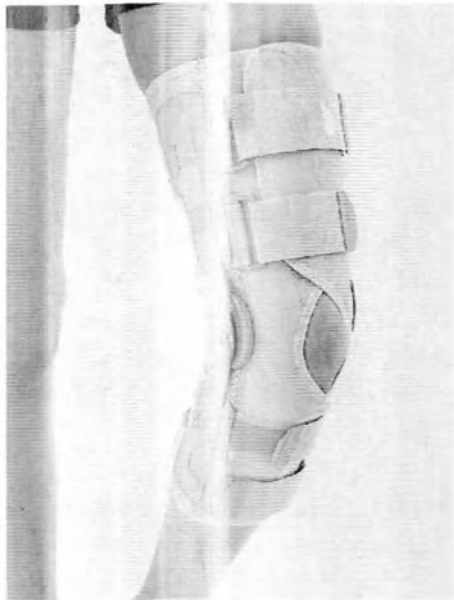IB-SKL/1R	
Общее описание Длинный ортез открытого типа IB-SKL/1R – это медицинское изделие, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Ортез оснащен четырьмя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO и двумя двухосными анатомическими боковыми шинами, которые во время сгибания точно отображают движение, происходящее в коленном суставе: благодаря этому шины во время работы не меняют свое положение относительно оси коленного сустава. Показания • после консервативного и оперативного лечения травм • при дегенеративных изменениях и нестабильности сустава вследствие перенесенных травм или болезней у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему. • при неустойчивости сустава и умеренно тяжелых дегенеративных изменениях • при парезе нижних конечностей для вертикализации и учения ходьбе • при болезнях требующих периодического обездвижения или ограничения диапазона движений в суставе.	

Технические характеристики				
Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	Размер M окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–38 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38–42 см	Размер XL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–46 см	Размер XXL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46–50 см


Габаритные размеры и масса

IB-SKL/1R, Размер S	Д x Ш x Г (45,5 см, 22 см, 7 см), Масса 0,581 кг
IB-SKL/1R, Размер M	Д x Ш x Г (45,5 см, 24 см, 7 см), Масса 0,625 кг
IB-SKL/1R, Размер L	Д x Ш x Г (45,5 см, 26 см, 7 см), Масса 0,672 кг
IB-SKL/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (45,5 см, 28 см, 7 см), Масса 0,719 кг
IB-SKL/1R, Размер XXL	Д x Ш x Г (45,5 см, 30 см, 7 см), Масса 0,769 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

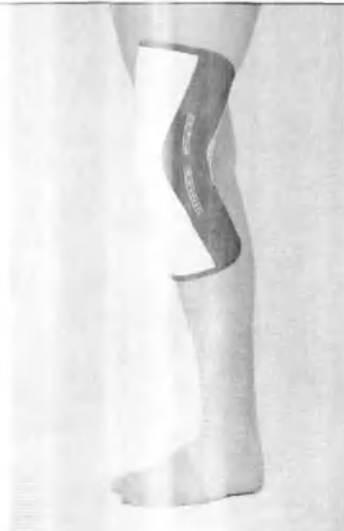IB-SKL/3	
Общее описание Это активный ортез для разгрузки и стабилизации коленного сустава в случае его нестабильности, отека или болей в колене. Ортез стабилизирует сустав, уменьшает боль. Ортез изготовлен из трехслойного, объемного материала, состоящего из спандекса снаружи, середины из неопрена, а внутренний слой около кожи — из CottonPlush. Последний отвечает за поддержку нужного микроклимата около кожи и эффективный отвод пота. Показания • нестабильность коленного сустава • при отеках колена • при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях	

Технические характеристики			
Размер M Обхват колена 34-38 см	Размер L Обхват колена 38-42 см	Размер XL Обхват колена 42-46 см	

Габаритные размеры и масса

IB-SKL/3, Размер M	Д x Ш x Г (45,5 см, 24 см, 7 см), Масса 0,625 кг
IB-SKL/3, Размер L	Д x Ш x Г (45,5 см, 26 см, 7 см), Масса 0,672 кг
IB-SKL/3, Размер XL	Д x Ш x Г (45,5 см, 28 см, 7 см), Масса 0,719 кг

ATTACK 1R					
Общее описание Ортез изготовлен из материала, который состоит из двух слоев спандекса, отвечающего за нужную компрессию и прилегание изделия к телу. Внутренняя мембрана поддерживает микроклимат около кожи и эффективно отводит пот, она очень мягкая на ощупь. С внешней стороны установлена алюминиевая, анатомическая шина 1R с регулировкой угла сгибания и разгибания с шагом 15°.					
Показания • вывих колена, • растяжение связок колена, • боковая нестабильность коленного сустава, • травмы коленных связок — особенно MCL и ACL травмы, • реконструкция связок колена, • другие операции (ортопедические), • отличная профилактика в спорте.					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	
30-34 см	34.5-38 см	38.5-42 см	42.5-46 см	46.5-50 см	

Габаритные размеры и масса

ATTACK 1R, Размер S	Д x Ш x Г (39 см, 15 см, 6 см), Масса 0,278 кг
ATTACK 1R, Размер M	Д x Ш x Г (39 см, 17 см, 6 см), Масса 0,299 кг

ATTACK 1R, Размер L	Д x Ш x Г (39 см, 19 см, 6 см), Масса 0,321 кг
ATTACK 1R, Размер XL	Д x Ш x Г (39 см, 21 см, 6 см), Масса 0,343 кг
ATTACK 1R, Размер XXL	Д x Ш x Г (39 см, 23 см, 6 см), Масса 0,368 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

ATTACK 2RA														
Общее описание Особенность данной модели заключается в равномерном распределении компрессии на верхнюю и нижнюю части коленного сустава. Модель выполнена в виде текстильного рукава с жесткими элементами. Боковую стабилизацию обеспечивают ортопедические планки – металлические шины, соединенные между собой шарниром с регулировкой угла сгибания. Помимо фиксирующих элементов на липучках, ортез оснащен двумя динамичными ремнями – в верхней и нижней части изделия, которые позволяют регулировать уровень компрессии и балансируют нагрузку на сустав. Показания • Растяжение связок или/и вывих сустава • Восстановление после операционного вмешательства • Остеоартрит Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th></tr> <tr> <td>Обхват колена 30-34 см</td><td>Обхват колена 34,5-38 см</td><td>Обхват колена 38,5-42 см</td><td>Обхват колена 42,5-46 см</td><td>Обхват колена 46,5-50 см</td></tr> </table>					Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL										
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см										
														

Габаритные размеры и масса

ATTACK 2RA, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 6 см), Масса 0,299 кг
ATTACK 2RA, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 6 см), Масса 0,322 кг
ATTACK 2RA, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 6 см), Масса 0,346 кг
ATTACK 2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 6 см), Масса 0,370 кг
ATTACK 2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 6 см), Масса 0,396 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.
 Регулировка угла разгибания: 15, 75.
 Шаг регулировки: 60 градусов.

ZEUS					
Общее описание Прочная рама изготовлена из легкого алюминия, который применяется в авиации. Кроме того, рама с порошковым покрытием, не боится влаги. В ортезе установлено 5 стабилизирующих ремней с антискользящими силиконовыми подушками, которые создают дополнительную поддержку, и предотвращают смещение ортеза на конечности. Показания • Легкая или тяжелая нестабильность связок ACL, PCL MCL и LCL • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL • Смешанные травмы ACL / PCL • Гиперэкстензия колена Технические характеристики <table border="1"> <tr> <td>Размер S Обхват колена 38 см</td><td>Размер M Обхват колена 47 см</td><td>Размер L Обхват колена 53 см</td></tr> </table>			Размер S Обхват колена 38 см	Размер M Обхват колена 47 см	Размер L Обхват колена 53 см
Размер S Обхват колена 38 см	Размер M Обхват колена 47 см	Размер L Обхват колена 53 см			
					

Габаритные размеры и масса

ZEUS, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 14,5 см, 15 см), Масса 0,654 кг
ZEUS, Размер M	Д x Ш x Г (38,5 см, 16,5 см, 15 см), Масса 0,744 кг
ZEUS, Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 19 см, 15 см), Масса 0,845 кг

AM-TUD-KD-03	
Общее описание Обездвиживающий нижнюю конечность ортез изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью со свойствами липучки. Тугор оснащен: 1. Открытым мягким рукавом, позволяющим приспособить изделие к разным окружностям нижней конечности. 2. Системой лент VELCRO, обеспечивающих надлежащее прилегание изделия к телу и эффективную фиксацию охраняемой конечности. 3. Системой анатомически профилированных	

алюминиевых шин с комплектом независимого крепления к рукаву тьютора.

Показания

Ортез можно использовать в случаях:

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок, в ранний период после других операций коленного сустава,
- ранней вертикализации больного

Технические характеристики

Размер универсальный

Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 – макс 75 см

Обхват икры 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 – макс 60 см

Длина от колена до паха мин 23 – макс 27 см

Длина от колена до голени мин 28 – макс 36,5 см

Габаритные размеры и масса

AM-TUD-KD-03, Размер универсальный

Д x Ш x Г (70 см, 32 см, 6 см), Масса 0,867 кг

OKD-04

Общее описание

OKD-04 – ортез, который является гибридом свойств открытых и закрытых моделей.


Практичная открытая конструкция и простота надевания позволяет использовать ортез в активной повседневной жизни – даже управлять автомобилем, что характерно открытым моделям. Высокая степень стабилизации и регулировка угла сгибания коленного сустава – характерные черты закрытых моделей, в полной мере реализованы в OKD-04.

Конструкция модели включает в себя:

- Текстильную основу в виде рукава с открытой областью в передней и задней части колена.
- Стабилизирующее кольцо по окружности коленного отверстия
- Ортопедические шины (съемные), соединенные между собой шарнирным механизмом с регулируемым градусом сгибания.
- Фиксирующие ремни в верхней и нижней части ортеза с креплением на липучке.

Показания

- вывих коленного сустава,

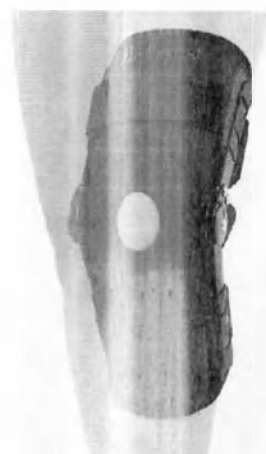

• растяжение связок колена, • боковая нестабильность коленного сустава, • растяжение связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других операций на колене (ортопедия), • подвывих надколенника (привычный, травма).				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см	46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-04, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 19,5 см, 6 см), Масса 0,436 кг
OKD-04, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 21,5 см, 6 см), Масса 0,484 кг
OKD-04, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 24 см, 6 см), Масса 0,538 кг
OKD-04, Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 26,5 см, 6 см), Масса 0,576 кг
OKD-04, Размер XXL	Д x Ш x Г (35 см, 29 см, 6 см), Масса 0,616 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

Общее описание

Конструкция ортеза представляет собой дизайн, сочетающий в себе как открытые ортезы-легкость надевания изделия за счет отсутствия необходимости натягивать ортез через стопу, так и закрытые - полную стабилизацию коленной чашечки и коленного сустава. Для этого в изделии было установлено анатомически сформированное коленное кольцо. Ортез ОКД-05 оснащен четырьмя комплектами обводных ремней и пластиковыми ручками ортопедических шин. В изделии использовались шины 1R orthodesign.

**Показания**

- вывих коленного сустава,
- растяжения коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждения связок колена LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции связок колена,
- после других оперативных процедур (ортопедия),
- подвывих надколенника-привычный, посттравматический

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки
40–44 см	44,5–48 см	48,5–52 см	52,5–56 см	56,5–60 см
окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки
30–34 см	34,5–38 см	38,5–42 см	42,5–46 см	46,5–50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-05, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 19,5 см, 6 см), Масса 0,436 кг
OKD-05, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 21,5 см, 6 см), Масса 0,484 кг
OKD-05, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 24 см, 6 см), Масса 0,538 кг
OKD-05, Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 26,5 см, 6 см), Масса 0,576 кг
OKD-05, Размер XXL	Д x Ш x Г (35 см, 29 см, 6 см), Масса 0,616 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-06

Общее описание

Конструкция изделия состоит из:

- Текстильной основы в виде рукава с открытыми зонами подколенной ямки и коленной чашечки
- Усиленная стабилизация по периметру кольцевого переднего отверстия.
- Съёмные ортопедические боковые шины с шарнирным механизмом. Позволяют пошагово увеличивать нагрузку на сустав (шаг угла сгибания 15 градусов)
- Фиксирующие ремни на липучках

Показания

Ортез OKD-06 можно применять в случае:

- вывихов коленного сустава,
- растяжения связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- травмы связок колена LCL, MCL и ACL,
- после артроскопии коленного сустава
- после других ортопедических операций
- подвывих надколенника (привычные, травматические)

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см



Габаритные размеры и масса

OKD-06, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 18,5 см, 5 см), Масса 0,369 кг
OKD-06, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 20,5 см, 5 см), Масса 0,397 кг
OKD-06, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 23 см, 5 см), Масса 0,427 кг
OKD-06, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 25,5 см, 5 см), Масса 0,470 кг
OKD-06, Размер XXL	Д x Ш x Г (37 см, 28 см, 5 см), Масса 0,503 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

Общее описание

Текстильная основа ортеза – длинный рукав, захватывающий большую часть бедра и голени, что позволяет максимально бережно поддерживать травмированную область и массати активную повседневную жизнь.

Открытые зоны надколенника и подколенной ямки позволяют коже дышать, что дает возможность носить ортез с комфортом длительное время. Модель оснащена съемными ортопедическими шинами с шарнирной регулировкой диапазона подвижности. Такая конструкция позволяет постепенно увеличивать нагрузку, а потом и вовсе убрать жесткую фиксацию.

**Показания**

Ортез OKD-07 можно применять в случае:

- вывихов коленного сустава,
- растяжения связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- травмы связок колена LCL, MCL и ACL,
- после артроскопии коленного сустава
- после других ортопедических операций
- подвывих надколенника (привычные, травматические)

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки
40–44 см	44,5–48 см	48,5–52 см	52,5–56 см	56,5–60 см
окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки
30–34 см	34,5–38 см	38,5–42 см	42,5–46 см	46,5–50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-07, Размер S	Д x Ш x Г (46 см, 20 см, 5 см), Масса 0,507 кг
OKD-07, Размер M	Д x Ш x Г (46 см, 22 см, 5 см), Масса 0,545 кг
OKD-07, Размер L	Д x Ш x Г (46 см, 24 см, 5 см), Масса 0,586 кг
OKD-07, Размер XL	Д x Ш x Г (46 см, 26 см, 5 см), Масса 0,627 кг
OKD-07, Размер XXL	Д x Ш x Г (46 см, 28 см, 5 см), Масса 0,670 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-08					
Общее описание Данная модель относится к закрытым ортезам и состоит из: • Текстильного рукава с открытым кольцом надколенника. • Боковых ортопедических шин с шарнирным механизмом, регулирующим угол сгибания. • Внутренний силиконовый рельеф - обеспечивает микромассажный эффект и препятствует скольжению рукава. • Фиксирующие ремни на застежке – липучке • Поддержка разгибания в виде заднего эластичного ремня с фиксацией положения на липучке. Ремень оснащен прочным пластиковым кольцом для удобства регулировки.					
Показания • После перенесенных травм локтевого сустава; • При острых и длительных болевых ощущениях в области предплечья; • При активном спорте как подстраховка перед непосредственными травмами.					
Технические характеристики					
Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Размер M окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	Размер XL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	Размер XXL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46-50 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-08, Размер S	Д x Ш x Г (45,5 см, 19,5 см, 7,5 см), Масса 0,631 кг
OKD-08, Размер M	Д x Ш x Г (45,5 см, 21 см, 7,5 см), Масса 0,685

	кг
OKD-08, Размер L	Д x Ш x Г (45,5 см, 23 см, 7,5 см), Масса 0,737 кг
OKD-08, Размер XL	Д x Ш x Г (45,5 см, 25 см, 7,5 см), Масса 0,789 кг
OKD-08, Размер XXL	Д x Ш x Г (45,5 см, 27 см, 7,5 см), Масса 0,844 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

ЕВ-SK/F					
Общее описание Ортез стабилизирует сбоку коленный сустав, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач. Показания • после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи с повреждением боковых связок) • при длительной нестабильности коленного сустава (боковой или центральной) • Применяется при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, и дегенеративных изменениях • при долечивании коленного сустава после перенесенных операций • профилактически при занятиях спортом. Технические характеристики					
Размер S Обхват колена 30-34 см	Размер M Обхват колена 34,5-38 см	Размер L Обхват колена 38,5-42 см	Размер XL Обхват колена 42,5-46 см	Размер XXL Обхват колена 46,5-50 см	Размер XXXL Обхват колена 50,5-54 см

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SK/F, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 18 см, 4 см), Масса 0,280 кг
--------------------------	--

ЕВ-SK/F, Размер М	Д х Ш х Г (35 см, 20 см, 4 см), Масса 0,301 кг
ЕВ-SK/F, Размер L	Д х Ш х Г (35 см, 22 см, 4 см), Масса 0,324 кг
ЕВ-SK/F, Размер XL	Д х Ш х Г (35 см, 24 см, 4 см), Масса 0,348 кг
ЕВ-SK/F, Размер XXL	Д х Ш х Г (35 см, 26 см, 4 см), Масса 0,371 кг
ЕВ-SK/F, Размер XXXL	Д х Ш х Г (35 см, 22 см, 4 см), Масса 0,396 кг

SPARTAN				
Общее описание Предназначен для пациентов с повреждениями, требующими в основном разгрузки медиального отделения или бокового коленного сустава. Три точки опоры позволяют разгрузить суставные поверхности большеберцовой и бедренной костей, уменьшить давление на поврежденный и истонченный суставной хрящ, уменьшить раздражение болевых рецепторов в субхондральном слое в фазе опоры (нагрузки) конечности. Уменьшая давление на суставы, они восстанавливают правильное выравнивание суставных поверхностей относительно друг друга, предотвращая формирование вальгусной или искривленной формы в фазе нагрузки. В ортезе установлены ортопедические шины 1RE, с эргономичной регулировкой угла сгибания и разгибания каждые 15 градусов.				
Показания • Вальгусность или деформация коленного сустава, вызванная из-за дегенеративных или посттравматических изменений • Умеренная или тяжелая нестабильность ACL, PCL, MCL и LCL, • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL, • Комбинированные травмы ACL/PCL.				
Технические характеристики				
Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см длина рельса 35-37 см	Размер М окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см длина рельса 37-40 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см длина рельса 40-43 см	Размер XL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см длина рельса 40-44 см	

Габаритные размеры и масса

SPARTAN, Размер S	Д x Ш x Г (38 см, 15 см, 15 см), Масса 0,669 кг
SPARTAN, Размер M	Д x Ш x Г (41 см, 17 см, 15 см), Масса 0,752 кг
SPARTAN, Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 19 см, 15 см), Масса 0,845 кг
SPARTAN, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 21 см, 15 см), Масса 0,937 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-Z/F	
Общее описание Открытая конструкция ортеза позволяет выполнить его в одном универсальном размере. Изделие хорошо подгоняется по ноге пациента. Кроме того, ортез имеет кольцо на надколенник, поддерживающее надколенник в оси, предотвращая его вывих, а также снимая нагрузку с целого надколенно-бедренного сустава. Таким образом ортез уменьшает риск коленной хондромалиции и дегенеративных изменений в колене. Показания • Боковой вывих коленной чашечки, • Вывих коленного сустава, • Растяжение связок коленного сустава, • Боковая нестабильность колена, • Повреждение связок колена LCL, MCL и ACL, • После реконструкции связок коленного сустава, • После других операций (ортопедия), • Боковой вывих надколенника (наиболее распространенный) травматический или привычный, • От легкой до умеренной боли в колене, • Нарушение движения коленной чашечки. Технические характеристики Размер универсальный Обхват колена мин 30 см – макс 45 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-Z/F, Размер универсальный	Д x Ш x Г (35 см, 22 см, 4 см), Масса 0,324 кг
-------------------------------	--

RAPTOR/1R

Общее описание

Внутренняя мягкая часть ортеза изготовлена из приятной для кожи ткани. Этот материал водостойкий. Он состоит из 3 слоев: прочной велкро-ткани из полиамида, разгружающей пенки EVA и полиамидной махровой ткани 3D. Внешний слой из велкро-ткани позволяет свободно пристегивать липучками ортопедические шины и адаптировать изделие к телу пациента благодаря гибкости при застегивании. Пенка EVA защищает от воздействия внешних жестких частей ортеза на тело, а внутренний объемный 3D слой хорошо вентилирует кожу и отводит пот.

Показания

- Нестабильность PCL
- Повреждение / разрыв PCL
- Повреждение / разрыв ACL
- Нестабильность MCL / LCL / ACL

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см



Габаритные размеры и масса

RAPTOR/1R, Размер S	Д x Ш x Г (38 см, 15 см, 13 см), Масса 0,594 кг
RAPTOR/1R, Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 17 см, 13 см), Масса 0,639 кг
RAPTOR/1R, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 19,5 см, 13 см), Масса 0,687 кг
RAPTOR/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 21 см, 13 см), Масса 0,735 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АТОМ/1R

Общее описание

Это четырехточечный ортез из сплава алюминия с порошковым покрытием. В ортезе установлены 2 анатомических шарнира 1R с регулировкой диапазона подвижности сустава с шагом в 15°.

Главные преимущества ортезов с технологией четырех точек опоры 4P:

1. Уменьшают напряжение передней крестообразной связки (ACL), что особенно важно при реабилитации вовремя ремоделирования связки.
2. Уменьшается время пребывания сустава в положении субмаксимального выпрямления или т.зв. опасного положения.
3. Увеличивается сила давления на большеберцовую кость назад для предотвращения ее трансляции (смещения) вперед.
4. Устраняет шок, ощущаемый пациентом в последней фазе выпрямления колена, предотвращает разрыв связок ACL.

Показания

- Легкая или тяжелая нестабильность связок ACL, PCL MCL и LCL
- Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL
- Смешанные травмы ACL / PCL
- Гиперэкстензия колена
- АТОМ/1R является хорошим средством при вальгусной и варусной деформации



Технические характеристики

Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 36–40 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40,5–44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5–48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5–52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5–56 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 26–30 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30,5–34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5–38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5–42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5–46 см

Габаритные размеры и масса

АТОМ/1R, Размер XS	Д x Ш x Г (39 см, 13 см, 12,5 см), Масса 0,547 кг
АТОМ/1R, Размер S	Д x Ш x Г (39 см, 15 см, 12,5 см), Масса 0,597 кг
АТОМ/1R, Размер M	Д x Ш x Г (39 см, 17 см, 12,5 см), Масса 0,61 кг

АТОМ/1R, Размер L	Д x Ш x Г (39 см, 19 см, 12,5 см), 0,693 кг
АТОМ/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (39 см, 21 см, 12,5 см), Масса 0,737 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-O/1R-01						
Общее описание Компактное ортопедическое приспособление для боковой стабилизации коленного сустава с возможностью постепенного увеличения нагрузки – модель AM-OSK-O/1R-01. Изделие представляет собой: • Текстильный рукав с открытой областью коленной чашечки. • Анатомически профилированные шины расположены в боковых областях рукава. • Шарнирный механизм контроля сгибания сустава обеспечивает постепенную нагрузку на колено и хорошую боковую стабилизацию • Ортез закрепляется на конечности с помощью ремней и клапанов на липучке (Велкро), что облегчает наложение и снятие.						
Показания • растяжения связок колена, • вывих коленного сустава, • боковая нестабильность коленного сустава, • травмы связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других хирургических операций (ортопедия).						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-O/1R-01, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 4 см), Масса 0,396 кг
AM-OSK-O/1R-01, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 24,5 см, 4 см), Масса 0,426 кг
AM-OSK-O/1R-01, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 27 см, 4 см), Масса 0,458 кг
AM-OSK-O/1R-01, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 29,5 см, 4 см), Масса 0,490 кг

AM-OSK-O/1R-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (37 см, 32,5 см, 4 см), Масса 0,524 кг
AM-OSK-O/1R-01, Размер XXXL	Д x Ш x Г (37 см, 36 см, 4 см), Масса 0,561 кг
AM-OSK-O/1R-01, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (37 см, 39,5 см, 4 см), Масса 0,600 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-Z/1R-01						
Общее описание Восстановить двигательные функции коленного сустава с помощью постепенного увеличения нагрузки можно с помощью ортеза AM-OSK-Z/1R-01. Модель включает следующие элементы: • Текстильная основа – компактный рукав. Для дополнительной фиксации рукав оснащен двумя ремнями на застежках липучках. • Анатомически профилированное отверстие на коленную чашечку поддерживает сустав в физиологически правильном положении и обеспечивает дополнительный приток воздуха. • Боковые ортопедические шины стабилизируют сустав по фронтальной и сагиттальной плоскости. • Механизм контроля подвижности дает возможность с шагом 15 градусов увеличивать/уменьшать угол сгибания колена.						
Показания • вывих коленного сустава, • растяжение связок коленного сустава, • боковая нестабильность коленного сустава, • травмы связок LCL, MCL и ACL, • реконструкция связок коленного сустава, • после операций на колене (ортопедия).						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/1R-01, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 4 см), Масса 0,393 кг
AM-OSK-Z/1R-01, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 21,5 см, 4 см), Масса 0,422 кг

AM-OSK-Z/1R-01, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 24 см, 4 см), Масса 0,454 кг
AM-OSK-Z/1R-01, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 26,5 см, 4 см), Масса 0,486 кг
AM-OSK-Z/1R-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 29 см, 4 см), Масса 0,520 кг
AM-OSK-Z/1R-01, Размер 3XL	Д x Ш x Г (36 см, 31,5 см, 4 см), Масса 0,556 кг
AM-OSK-Z/1R-01, Размер 4XL	Д x Ш x Г (36 см, 34 см, 4 см), Масса 0,595 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-ZL/1R-01						
Общее описание Длинный ортез закрытого типа из материала, который адаптируется и прилегает к телу пациента, растягивается во все стороны, точно моделируя форму конечности. Ортез имеет независимые наборы ремней на липучках, две двухосные боковые шины с регулировкой угла сгибания с шагом 15° и анатомической формы кольцо с противогрибковыми свойствами, который стабилизирует коленную чашечку. Оно также дополнительно усилено эластичными ремнями.						
Показания • вывих коленного сустава, • растяжение связок колена, • боковая нестабильность коленного сустава, • растяжение связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других операций на колене (ортопедия), • подвывих надколенника (привычный, травма).						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 56,5-60 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 60,5-64 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 64,5-68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 50,5-54 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 54,5-58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/1R-01, Размер S	Д x Ш x Г (46 см, 19 см, 7 см), Масса 0,597 кг
AM-OSK-ZL/1R-01, Размер M	Д x Ш x Г (46 см, 21,5 см, 7 см), Масса 0,642 кг
AM-OSK-ZL/1R-01, Размер L	Д x Ш x Г (46 см, 24 см, 7 см), Масса 0,69 кг
AM-OSK-ZL/1R-01, Размер XL	Д x Ш x Г (46 см, 26,5 см, 7 см), Масса 0,738 кг
AM-OSK-ZL/1R-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (46 см, 29 см, 7 см), Масса 0,79 кг
AM-OSK-ZL/1R-01, Размер XXXL	Д x Ш x Г (46 см, 31,5 см, 7 см), Масса 0,845 кг
AM-OSK-ZL/1R-01, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (46 см, 34 см, 7 см), Масса 0,904 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-OL/1R-01						
Общее описание Ортез предназначен для длительного использования у пациентов со сложной нестабильностью коленного сустава (частичное или полное повреждение передней крестообразной связки), являющейся следствием перенесенных травм (в пред-и послеоперационный период) или перенесенных процессов заболевания. Изделие оснащено двумя независимыми узлами усилительных ремней, изготовленными из лент VELCRO, и двумя двухосными боковыми направляющими 1R orthodesign. Показания • вывих коленного сустава, • растяжения коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждения связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других оперативных процедур (ортопедия)						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки

40-44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	44,5-48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	48,5-52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	52,5-56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	56,5-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см	60,5-64 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 50,5-54 см	64,5-68 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 54,5-58 см
---	---	---	---	---	---	---

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-OL/1R-01, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 24 см, 7 см), Масса 0,560 кг
AM-OSK-OL/1R-01, Размер M	Д x Ш x Г (45 см, 27 см, 7 см), Масса 0,602 кг
AM-OSK-OL/1R-01, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 30 см, 7 см), Масса 0,647 кг
AM-OSK-OL/1R-01, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 33 см, 7 см), Масса 0,692 кг
AM-OSK-OL/1R-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 36 см, 7 см), Масса 0,741 кг
AM-OSK-OL/1R-01, Размер XXXL	Д x Ш x Г (45 см, 39 см, 7 см), Масса 0,792 кг
AM-OSK-OL/1R-01, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (45 см, 42 см, 7 см), Масса 0,848 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KD-AM/1R-01	
Общее описание Шино-повязочный аппарат нижней конечности изготовлен из: - Двух открытых рукавов – бедра и голени – способствующих легкому их наложению и точному прилеганию соответственно размерам окружностей нижней конечности. - Ортопедических шин с системой их фиксации. - Набора лент VELCRO. Изделие оснащено двумя двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом и регулировкой угла сгибания и разгибания. Показания • в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики) • в качестве иммобилизатора и в период	

реабилитации после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют оперативного лечения или не классифицируются к нему • в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов • для профилактики и лечения контрактур коленного сустава вызванных парезом или болезненными изменениями.		
Технические характеристики		
Размер S Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44-52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-42 см Расстояние от колена до паха 21,5 см	Размер M Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 25,5 см	Размер L Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 28,5 см

Габаритные размеры и масса

AM-KD-AM/1R-01, Размер S	Д x Ш x Г (52 см, 22 см, 6 см), Масса 0,512 кг
AM-KD-AM/1R-01, Размер M	Д x Ш x Г (60 см, 26 см, 6 см), Масса 0,617 кг
AM-KD-AM/1R-01, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-01	
Общее описание Ортез сконструирован так что адаптируется для любой конечности. Ортез состоит из профилированного, анатомического рукава из ткани с поверхностью для липучек, изнутри с очень мягкой пенкой из полиуретана. В ортезе применены профилированные ортопедические вставки из очень твердого сплава алюминия с покрытием, защищающим от воздействия пота. В задней части установлен набор двойных планшетонок, а бо бокам — одинарные. Эти шины можно пристегивать в любом месте, таким образом конфигурируя ортез под	

конечность. Показания • вывих колена, • растяжения связок колена, • боковая нестабильность коленного сустава, • повреждение связок колена LCL, MCL и ACL • реконструкция связок колена, • в начальных стадиях после других хирургических операций коленного сустава колена, • операции на колене (ортопедия). Технические характеристики		
Размер М Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 65 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 50 см Длина изделия 50 см	Размер L Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 65 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 50 см Длина изделия 60 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-01, Размер М	Д x Ш x Г (51 см, 36 см, 6 см), Масса 0,447 кг
OKD-01, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 36 см, 6 см), Масса 0,538 кг

OKD-02	
Общее описание Изделие оснащено двумя двухосными боковыми направляющими с реечным механизмом и регулировкой угла изгиба и разгибания. Шарнир имеет диапазон регулировки угла изгиба и разгибания каждые 20 градусов и не требует использования каких-либо инструментов. Шины обеспечивают боковую стабилизацию конечности. Система ремней VELCRO позиционирует изделие и обеспечивает более точное прилегание аппарата к конечности и более эффективную стабилизацию защищенного сустава. Кроме того, установлены внутри от сустава мягкие подушки, предназначенные для защиты колена от травм. Показания • После обширных операций на коленном суставе по травматическим причинам (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и патологическим (частичная или полная аллопластика). • При тяжелой нестабильности или дегенеративных	

изменениях коленного сустава. • В период вертикализации и обучения ходьбе, когда больных лечат от неврологических и ортопедических причин. • Для профилактики и лечения контрактур коленного и голеностопного суставов, вызванных парезом или дегенеративными изменениями.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44-52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-42 см Расстояние от колена до паха 21,5 см	Размер M Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 25,5 см	Размер L Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 28,5 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-02, Размер S	Д х Ш х Г (36 см, 21 см, 4 см), Масса 0,279 кг
OKD-02, Размер M	Д х Ш х Г (41 см, 25 см, 4 см), Масса 0,335 кг
OKD-02, Размер L	Д х Ш х Г (46 см, 25 см, 4 см), Масса 0,373 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

АТОМ/2RA

Общее описание

Это четырехточечный ортез из сплава алюминия с порошковым покрытием. В ортезе установлены два анатомических шарнира 2RA с регулировкой диапазона подвижности сустава с шагом в 20°.

Главные преимущества ортезов с технологией четырех точек опоры 4Р:

1. Уменьшают напряжение передней крестообразной связки (ACL), что особенно важно при реабилитации во время ремоделирования связки.
2. Уменьшается время пребывания сустава в положении субмаксимального выпрямления или т.зв. опасного положения.
3. Увеличивается сила давления на большеберцовую кость назад для предотвращения ее трансляции (смещения) вперед.
4. Устраняет шок, ощущаемый пациентом в последней фазе выпрямления колена, предотвращает разрыв связок ACL.

Показания

- Легкая или тяжелая нестабильность связок ACL, PCL MCL и LCL
- Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL
- Смешанные травмы ACL / PCL
- Гиперэкстензия колена
- АТОМ/1R является хорошим средством при вальгусной и варусной деформации



Технические характеристики

Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 36–40 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40,5–44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5–48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5–52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5–56 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 26–30 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30,5–34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5–38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5–42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5–46 см

Габаритные размеры и масса

АТОМ/2RA, Размер XS	Д x Ш x Г (39 см, 13 см, 11 см), Масса 0,482 кг
АТОМ/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (39 см, 15 см, 11 см), Масса 0,535 кг
АТОМ/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (39 см, 17 см, 11 см), Масса 0,595 кг

АТОМ/2РА, Размер L	Д x Ш x Г (39 см, 19 см, 11 см), Масса 0,661 кг
АТОМ/2РА, Размер XL	Д x Ш x Г (39 см, 21 см, 11 см), Масса 0,727 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

RAPTOR/2RA																								
Общее описание Прочная рама изготовлена из легкого алюминия. Кроме того, рама с порошковым покрытием, не боится влаги. Мягкая подкладка из водостойкой пенки. В ортезе установлено 5 стабилизирующих ремней с антимиграционными силиконовыми подушками, которые создают дополнительную поддержку, и предотвращают смещение ортеза на конечности. Показания • Нестабильность PCL • Повреждение / разрыв PCL • Повреждение / разрыв ACL • Нестабильность MCL / LCL / ACL Технические характеристики <table><tr><th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr><tr><td>Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки</td><td>Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки</td><td>Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки</td><td>Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки</td></tr><tr><td>40-44 см</td><td>44,5-48 см</td><td>48,5-52 см</td><td>52,5-56 см</td></tr><tr><td>Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки</td><td>Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки</td><td>Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки</td><td>Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки</td></tr><tr><td>30-34 см</td><td>34,5-38 см</td><td>38,5-42 см</td><td>42,5-46 см</td></tr></table>				Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	40-44 см	44,5-48 см	48,5-52 см	52,5-56 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см	
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL																					
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки																					
40-44 см	44,5-48 см	48,5-52 см	52,5-56 см																					
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки																					
30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см																					

Габаритные размеры и масса

RAPTOR/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 16 см, 12 см), Масса 0,537 кг
RAPTOR/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 18 см, 12 см), Масса 0,595 кг
RAPTOR/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 20 см, 12 см), Масса 0,663 кг
RAPTOR/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 12 см), Масса 0,729 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

ЕВ-SK/A				
Общее описание Орtez является медицинским изделием первой категории и состоит из: • Текстильного рукава закрытого типа • Боковые области выполнены из неэластичного материала, который включает в себя многослойную структуру. • Эластичные шины, расположенные в боковых частях на последних этапах восстановления можно демонтировать и использовать облегченную форму ортеза. • Силиконовый рельеф на внутренней части ортеза препятствует соскальзыванию и создает микромассажный эффект. • Комплект эластичных ремней служит для фиксации и дополнительной регулировки компрессии.				
Показания ЕВ-SK/A применяется в случае: • дислокации колена, • растяжения связок колена, • боковой нестабильности коленного сустава, • повреждение связок коленного сустава LCL, MCL и ACL • после реконструкции связок колена • после другой операции (ортопедия).				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см



Габаритные размеры и масса

ЕВ-SK/A, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 18 см, 4 см), Масса 0,280 кг
ЕВ-SK/A, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 20 см, 4 см), Масса 0,301 кг
ЕВ-SK/A, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 22 см, 4 см), Масса 0,324 кг
ЕВ-SK/A, Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 24 см, 4 см), Масса 0,347 кг

AM-OSK-Z/S-A

Общее описание

Изделие оснащено независимыми группами укрепляющих ремней, выполненных из ленты VELCRO, удобной застежкой крест-накрест, а также анатомически профилируемыми кольцами, стабилизирующими коленную чашечку.

Стабилизирует сустав и коленную чашечку, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному утгнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам.

Показания

- после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением связок)
- при нестабильности сустава (боковой или центральной)
- при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях
- после перенесенных операций при долечивании коленного сустава
- профилактически в спорте — выполняет защитную функцию.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

**Габаритные размеры и масса**

AM-OSK-Z/S-A, Размер S	Д х Ш х Г (35 см, 20,5 см, 5 см), Масса 0,386 кг
AM-OSK-Z/S-A, Размер M	Д х Ш х Г (35 см, 23 см, 5 см), Масса 0,415 кг
AM-OSK-Z/S-A, Размер L	Д х Ш х Г (35 см, 25,5 см, 5 см), Масса 0,446 кг
AM-OSK-Z/S-A, Размер XL	Д х Ш х Г (35 см, 28 см, 5 см), Масса 0,477 кг
AM-OSK-Z/S-A, Размер XXL	Д х Ш х Г (35 см, 30,5 см, 5 см), Масса 0,511 кг

АМ-ОСК-З/С-А (детский)

Общее описание

Модель АМ-ОСК-З/С-А относится к типу закрытых ортезов и применяется по назначению врача. Конструкция изделия выполнена в виде эластичного рукава с фиксирующими и стабилизирующими элементами.

Ортез обеспечивает центральную стабилизацию коленной чашечки с помощью усиленного двойным слоем пенки кольца анатомической формы. Для дополнительной фиксации в конструкции ортеза предусмотрены эластичные ремни на липучке.



Показания

- Механические повреждения сустава, не требующие жесткой иммобилизации – ушибы, вывихи, растяжения
- Профилактика травм при активном занятии спортом
- Поддержка сустава – боковая и центральная
- Заключительный этап реабилитации после операций на коленном суставе

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват колена 23 — 26 см	Обхват колена 26,5 — 29 см	Обхват колена 29,5 — 33 см
Подходит для возраста 2 – 5 лет	Подходит для возраста 5 – 8 лет	Подходит для возраста 8 – 12 лет
Общая высота изделия 25 см	Общая высота изделия 27 см	Общая высота изделия 27 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОСК-З/С-А (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (28 см, 18 см, 4 см), Масса 0,315 кг
АМ-ОСК-З/С-А (детский), Размер 2	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 4 см), Масса 0,35 кг
АМ-ОСК-З/С-А (детский), Размер 3	Д x Ш x Г (30 см, 24 см, 4 см), Масса 0,385 кг

АМ-ОСК-З/З

Общее описание

Предназначен для пациентов с повреждениями, требующими в основном разгрузки медиального отделения или бокового коленного сустава. Три точки опоры позволяют разгрузить суставные поверхности большеберцовой и бедренной костей, уменьшить давление на поврежденный и истонченный суставной хрящ, уменьшить раздражение болевых рецепторов в субхондральном слое в фазе опоры (нагрузки) конечности. Уменьшая давление на суставы, они восстанавливают правильное выравнивание суставных поверхностей относительно друг друга, предотвращая образование вальгусности или деформации в фазе нагрузки.

Изделие оснащено динамическим спиральным поясом, корректирующим деформации коленного сустава и одной 3х осевой боковой шиной с зубчатым механизмом без регулировки угла сгибания и разгибания.



Показания

- вывих коленного сустава,
- растяжения коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждения связок колена-в основном связки MCL и ACL,
- после реконструкции связок колена,
- после других оперативных процедур (ортопедия),
- отлично подходит в качестве защиты в спорте.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см
окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–38 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38–42 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–46 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46–50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZJ/3, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 17 см, 12 см), Масса 0,375 кг
AM-OSK-ZJ/3, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 18,5 см, 12 см), Масса 0,403 кг
AM-OSK-ZJ/3, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 20 см, 12 см), Масса 0,433 кг

AM-OSK-ZJ/3, Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 21,5 см, 12 см), Масса 0,463 кг
AM-OSK-ZJ/3, Размер XXL	Д x Ш x Г (35 см, 23 см, 12 см), Масса 0,496 кг

Регулировка угла сгибания: 30, 50, 70.

Регулировка угла разгибания: 0, 20.

Шаг регулировки: 20 градусов.

EB-SK/1R														
Общее описание Ортез стабилизирует коленный сустав, ограничивает нагрузку и способствует ускорению процесса восстановления двигательных функций. Модель может использоваться как постоянно в процессе лечения, так и периодически, в повседневной жизни по мере необходимости. В состав ортеза входят: • Ортопедические боковые шины из прочного сплава пластика и углеволокна. • Шарнирный механизм регулировки подвижности с шагом угла разгибания в 15 градусов. Изделие фиксируется на ноге двумя независимыми ремнями на застежке Велкро (липучке). Показания • после консервативного и оперативного лечения травм коленного сустава • при дегенеративных изменениях и нестабильности сустава вследствие перенесенных травм или болезней у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему. • при неустойчивости сустава и умеренно тяжелых дегенеративных изменениях. • при парезе нижних конечностей для вертикализации и учения ходьбе • при болезнях требующих периодического обездвижения или ограничения диапазона движений в суставе. Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th></tr> <tr> <td>Обхват колена 30-34 см</td><td>Обхват колена 34,5-38 см</td><td>Обхват колена 38,5-42 см</td><td>Обхват колена 42,5-46 см</td><td>Обхват колена 46,5-50 см</td></tr> </table>					Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL										
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см										
														

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SK/1R, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 5 см), Масса 0,429 кг
ЕВ-SK/1R, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 5 см), Масса 0,461 кг
ЕВ-SK/1R, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 5 см), Масса 0,496 кг
ЕВ-SK/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 5 см), Масса 0,531 кг
ЕВ-SK/1R, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 5 см), Масса 0,568 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

ЕВ-SKL/3					
Общее описание Ортез шино-повязочный для нижней конечности закрытого типа, оснащен механическими боковыми шинами без регулировки угла сгибания и разгибания, зубчатым механизмом, затягивающимися лентами ВЕЛКРО и поперечным усилением ACL. Ортез стабилизирует коленный сустав и снимает нагрузку с мышц. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, он оказывает обезболивающее и уменьшающее отечность действие, а также облегчает всасывание экссудатов и гематомы после перенесенных травм.					
Показания Ортез ЕВ-SKL/3 можно использовать в случае: • передовых дегенеративных изменениях, • боковой нестабильности колена, • вывих коленного сустава, • растяжения коленного сустава.					
Технические характеристики					
Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	Размер М окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–38 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38–42 см	Размер XL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–46 см	Размер XXL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46–50 см	


Габаритные размеры и масса

ЕВ-SKL/3, Размер S	Д x Ш x Г (45,5 см, 20 см, 6 см), Масса 0,554 кг
ЕВ-SKL/3, Размер М	Д x Ш x Г (45,5 см, 22 см, 6 см), Масса 0,595 кг
ЕВ-SKL/3, Размер L	Д x Ш x Г (45,5 см, 24 см, 6 см), Масса 0,64 кг
ЕВ-SKL/3, Размер XL	Д x Ш x Г (45,5 см, 26 см, 6 см), Масса 0,685 кг
ЕВ-SKL/3, Размер XXL	Д x Ш x Г (45,5 см, 28 см, 6 см), Масса 0,733 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

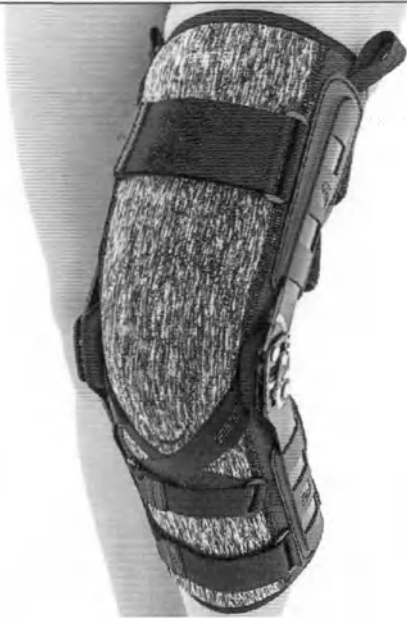ЕВ-SKL/2RA	
Общее описание Данный ортез закрытого типа охватывает значительную площадь нижней конечности, что улучшает стабилизацию и ускоряет процесс восстановления. Изделие выполнено из комбинации ортопедического текстиля и жестких металлических элементов: • Базовый текстиль, из которого изготовлен рукав ортеза. • Многослойный текстиль, используется в комбинации с ортопедическими шинами. • Двухслойная разгружающая пенка в области коленной чашечки дает дополнительную поддержку суставу в передней части, а также защищает от случайностей внешнего воздействия. • Металлические боковые шины из алюминиевого сплава с защитным покрытием служат для боковой стабилизации. • Стыковочный механизм с регулировкой подвижности, который соединяет между собой ортопедические шины. Такой механизм позволяет постепенно увеличивать нагрузку (угол разгибания с шагом 15 градусов), блокировать разгибание на 75 градусов, а также полностью иммобилизовать сустав. Показания • при серьезной неустойчивости коленного сустава по причинам ортопедическим и неврологическим • после перенесенных травм коленного сустава, не требующих оперативного лечения либо не классифицирующихся к нему (растяжения с повреждением боковых и крестообразных связок, надрывы мышечных прикреплений) • при дегенеративных изменениях и/или неустойчивости коленного сустава вследствие перенесенных травм или болезней у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение	

либо не классифицируются к нему • при восстановлении после хирургического лечения коленного сустава по причинам травм или болезней • при умеренно тяжелых дегенеративных изменениях и/или неустойчивости сустава у активных или занимающихся спортом людей • при парезе нижних конечностей для вертикализации и учения ходьбе				
Технические характеристики				
Размер S Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	Размер M Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44,5–48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5–38 см	Размер L Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48,5–52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5–42 см	Размер XL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52,5–56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5–46 см	Размер XXL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56,5–60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5–50 см

Габаритные размеры и масса

EB-SKL/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (45,5 см, 20 см, 6 см), Масса 0,554 кг
EB-SKL/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (45,5 см, 22 см, 6 см), Масса 0,595 кг
EB-SKL/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (45,5 см, 24 см, 6 см), Масса 0,64 кг
EB-SKL/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (45,5 см, 26 см, 6 см), Масса 0,685 кг
EB-SKL/2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (45,5 см, 28 см, 6 см), Масса 0,733 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

EB-SKL/2RA-ACL

Общее описание

Ортез закрытого типа EB-SKL/2RA-ACL — это медицинское изделие, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Изделие оснащено стягивающими лентами VELCRO, динамичной системой укрепления передних крестообразных связок коленного сустава и двухосными анатомическими боковыми шинами длиной 380 мм. Эти шины имеют блокировку при переразгибании – 15 градусов, блокировку при сгибании – 75 градусов и блокировку при полном разгибании.

Ортез стабилизирует коленный сустав, разгружает прикрепления мышц; позволяет установить диапазон движений сустава (0,15,75 градусов). Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшающее отеки; способствует рассасыванию выпотов и гематом вследствие перенесенных травм.

Показания

- после оперативного и консервативного лечения повреждения крестообразных связок
- при прогрессирующих дегенеративных изменениях и/или неустойчивости коленного сустава вследствие перенесенных травм или болезней у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему
- после перенесенных травм коленного сустава, не требующих оперативного лечения либо не классифицирующихся к нему (растяжения с повреждением боковых и крестообразных связок, надрывы мышечных прикреплений)
- при восстановлении после хирургического лечения коленного сустава по причинам травм или болезней
- при парезе нижних конечностей для вертикализации и учения ходьбе
- для предупреждения и лечения контрактур коленного сустава по ортопедическим и неврологическим причинам.



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной	Обхват голени 15 см ниже центра коленной	Обхват голени 15 см ниже центра коленной	Обхват голени 15 см ниже центра коленной	Обхват голени 15 см ниже центра коленной

чашечки 30-34 см	чашечки 34-38 см	чашечки 38-42 см	чашечки 42-46 см	чашечки 46-50 см
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SKL/2RA-ACL, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 20 см, 4 см), Масса 0,575 кг
ЕВ-SKL/2RA-ACL, Размер М	Д x Ш x Г (45 см, 22,5 см, 4 см), Масса 0,618 кг
ЕВ-SKL/2RA-ACL, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 25 см, 4 см), Масса 0,665 кг
ЕВ-SKL/2RA-ACL, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 27,5 см, 4 см), Масса 0,712 кг
ЕВ-SKL/2RA-ACL, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 30 см, 4 см), Масса 0,716 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-KD-AM/1RE	
Общее описание Модульный аппарат нижней конечности Stratech 1 RE стабилизирует и разгружает коленный сустав и позволяет постепенно контролировать увеличение диапазона движения в коленном суставе каждые 15 градусов. Аппарат был оборудован: • Два открытых рукава – бедра и голени – позволяют легко надевать их и точно приспосабливать к размерам окружности нижней конечности. • Ортопедические шины 1RE с системой их крепления. • Группа липучек. Показания • Как стабилизация коленного сустава после оперативных процедур (после надрыва или разрыва связок, повреждения мениска и других хирургических процедур) • в случае тяжелой и сложной нестабильности колена • в период вертикализации и обучения ходьбе у пациентов с парезом одной или обеих нижних конечностей • для профилактики и лечения контрактур суставов, вызванных парезом или дегенеративными изменениями Технические характеристики	

Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–52 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–42 см Длина стелей 38 см	Размер M окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–60 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–50 см Длина стелей 47 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–60 см окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–50 см Длина стелей 53 см	
---	---	---	--

Габаритные размеры и масса

AM-KD-AM/1RE, Размер S	Д x Ш x Г (46,5 см, 24,5 см, 6 см), Масса 0,596 кг
AM-KD-AM/1RE, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 29 см, 6 см), Масса 0,678 кг
AM-KD-AM/1RE, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KD-AM/1RE-03	
Общее описание Изделие оснащено системой 4-точечной поддержки, обеспечивающей повышенную защиту коленного сустава. Ортез имеет одноосную рейку 1 RE с регулировкой угла изгиба и разгибания каждые 15 градусов. Наклонная форма рамы с внутренней стороны гарантирует комфорт при ношении ортеза, нивелируя риск повреждения второй конечности рамой ортеза. Внутренние монтируемые ремни и антискользящие подушки обеспечивают дополнительную поддержку для предотвращения скольжения ортеза. Показания • Умеренная или тяжелая нестабильность ACL, PCL, MCL и LCL, • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL, • Комбинированные травмы ACL/PCL, • Гиперплазия коленного сустава. Технические характеристики	

Размер S	Размер M	Размер L	
Длина шины 44 см	Длина шины 53 см	Длина шины 59 см	
Максимальная окружность бедра 50 см	Максимальная окружность бедра 55 см	Максимальная окружность бедра 60 см	
Максимальная окружность голени 35 см	Максимальная окружность голени 40 см	Максимальная окружность голени 45 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-AM/1RE-03, Размер S	Д x Ш x Г (46,5 см, 24,5 см, 6 см), Масса 0,596 кг
АМ-KD-AM/1RE-03, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 29 см, 6 см), Масса 0,678 кг
АМ-KD-AM/1RE-03, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-KD-AM/2RA-03			
Общее описание Изделие оснащено системой 4-точечной поддержки, обеспечивающей повышенную защиту коленного сустава. Ортез имеет анатомическую шину с регулировкой угла изгиба и разгибания – 2RA (блокировка изгиба 75°, разгибание 15° и возможность иммобилизации при 0°). Наклонная форма рамы с внутренней стороны гарантирует комфорт при ношении ортеза, нивелируя риск повреждения второй конечности рамой ортеза. Внутренние монтируемые ремни и антискользящие подушки обеспечивают дополнительную поддержку для предотвращения скольжения ортеза. Показания • Умеренная или тяжелая нестабильность ACL, PCL, MCL и LCL, • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL, • Комбинированные травмы ACL/PCL, • Гиперплазия коленного сустава. Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	
Длина шины 44 см	Длина шины 53 см	Длина шины 59 см	
Максимальная	Максимальная	Максимальная	

окружность бедра 50 см Максимальная окружность голени 35 см	окружность бедра 55 см Максимальная окружность голени 40 см	окружность бедра 60 см Максимальная окружность голени 45 см	
--	--	--	--

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-AM/2RA-03, Размер S	Д x Ш x Г (46,5 см, 24,5 см, 6 см), Масса 0,596 кг
АМ-KD-AM/2RA-03, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 29 см, 6 см), Масса 0,678 кг
АМ-KD-AM/2RA-03, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-KD-AM/1RE-02					
Общее описание Функциональный ортез коленного сустава используется в случае повреждения PCL и предотвращения этой травмы. Имеет мышечковые подушечки, повышающие комфорт использования. Ортез изготовлен из прочного переднезаднего каркаса из авиационного алюминия. Кроме того, чтобы лучше защитить ортез от влаги, каркас был покрыт прочным порошковым покрытием в горячем состоянии, в результате чего ортез становится инертным по отношению к воде и поту пациента. Показания • Легкая или тяжелая нестабильность связок ACL, PCL MCL и LCL • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL • Смешанные травмы ACL / PCL • Гиперэкстензия колена Технические характеристики <table> <tr> <td>Размер S Обхват колена 38 см</td><td>Размер M Обхват колена 47 см</td><td>Размер L Обхват колена 53 см</td></tr> </table>			Размер S Обхват колена 38 см	Размер M Обхват колена 47 см	Размер L Обхват колена 53 см
Размер S Обхват колена 38 см	Размер M Обхват колена 47 см	Размер L Обхват колена 53 см			
					

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-AM/1RE-02, Размер S	Д x Ш x Г (46,5 см, 24,5 см, 6 см), Масса 0,596 кг
---------------------------	--

AM-KD-AM/IRE-02, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 29 см, 6 см), Масса 0,678 кг
AM-KD-AM/IRE-02, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AS-SK/A					
Общее описание Коленный бандаж относится к группе 4sport. AS-SK/A оснащен гибкими боковыми шинами, которые состоят из нескольких слоев упругих перьев, взаимодействуют с естественным движением колена и стабилизируют сустав колена в боковой позиции. Кроме того, ортез был оснащен независимыми комплектами ремней VELCRO и усилением ACL. Специальное кольцо стабилизирует коленную чашечку и разгружает коленно-бедренный сустав и его связку. Показания • вывих коленного сустава, • растяжения коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждения связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других оперативных процедур (ортопедия), • подвывих надколенника-привычный, посттравматический Технические характеристики					
Размер S Обхват колена 30-34 см	Размер M Обхват колена 34,5-38 см	Размер L Обхват колена 38,5-42 см	Размер XL Обхват колена 42,5-46 см	Размер XXL Обхват колена 46,5-50 см	Размер XXXL Обхват колена 50,5-54 см

Габаритные размеры и масса

AS-SK/A, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 18 см, 4 см), Масса 0,256 кг
AS-SK/A, Размер M	Д x Ш x Г (34 см, 20 см, 4 см), Масса 0,275 кг
AS-SK/A, Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 22 см, 4 см), Масса 0,296 кг
AS-SK/A, Размер XL	Д x Ш x Г (34 см, 24 см, 4 см), Масса 0,317 кг
AS-SK/A, Размер XXL	Д x Ш x Г (34 см, 26 см, 4 см), Масса 0,339 кг
AS-SK/A, Размер XXXL	Д x Ш x Г (34 см, 28 см, 4 см), Масса 0,363 кг

ЕВ-SK/2														
Общее описание Основная особенность модели ЕВ-SK/2 – наличие ортопедических двuosных шин без регулировки угла сгибания. Медицинское назначение изделия заключается в поддержке и защите коленного сустава от излишней нагрузки путем ограничения подвижности. Ортопедические шины служат для боковой стабилизации, а механизм разгибания с зубчатой передачей аналогичен анатомической динамике колена. Жесткие элементы выполнены из алюминиевого сплава с порошковым покрытием для защиты от воздействия влаги. Медицинское изделие относится к типу закрытых ортезов и надевается через ступню. Показания • растяжение или вывих коленного сустава • после травмы колена, которые не требуют или не позволяют на хирургическую операцию (вывихи с повреждением связок боковых и крестообразных, надрывы сухожилий мышц) • дегенеративные изменения при нестабильности вследствие травм или заболеваний • травмы связок (ACL, PCL, LCL, MCL) Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th></tr> <tr> <td>Обхват колена 30-34 см</td><td>Обхват колена 34,5-38 см</td><td>Обхват колена 38,5-42 см</td><td>Обхват колена 42,5-46 см</td><td>Обхват колена 46,5-50 см</td></tr> </table>					Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL										
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см										



Габаритные размеры и масса

ЕВ-SK/2, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 5 см), Масса 0,387 кг
ЕВ-SK/2, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 5 см), Масса 0,416 кг
ЕВ-SK/2, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 5 см), Масса 0,447 кг
ЕВ-SK/2, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 5 см), Масса 0,478 кг
ЕВ-SK/2, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 5 см), Масса 0,512 кг

ЕВ-SK/2RA**Общее описание**

Конструкция данной модели включает в себя:

- Текстильную основу – закрытый рукав на область колена, бедра и голени.
- Стабилизирующее коленное кольцо – усиленная разгрузочная пена в области колена защищает и поддерживает сустав в естественно правильном положении.
- Ортопедические боковые шины – жесткие элементы конструкции, которые обеспечивают стабилизацию по бокам сустава.
- Механизм контроля сгибания/разгибания. Регулировка угла с шагом в 15 градусов позволяет постепенно увеличивать нагрузку.
- Ортопедический многослойный текстиль, из которого выполнены части ортеза под жесткими элементами.
- Фиксирующие ремни на липучке.

**Показания**

- травмы связок (ACL, PCL, LCL, MCL)
- повреждение менисков
- скручивания коленного сустава
- вывих колена
- после травмы колена, которые не требуют или не позволяют на хирургическую операцию (вывихи с повреждением связок боковых и крестообразных, надрывы сухожилий мышц)
- дегенеративные изменения при нестабильности вследствие травм или заболеваний
- профилактика в спорте

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SK/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 5 см), Масса 0,393 кг
ЕВ-SK/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 5 см), Масса 0,436 кг
ЕВ-SK/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 5 см), Масса 0,483 кг
ЕВ-SK/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 5 см), Масса 0,498 кг
ЕВ-SK/2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 5 см), Масса 0,537 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OSK-Z/2RA-OR

Общее описание

Ортез закрытого типа AM-OSK-Z/2RA-OR – это медицинское изделие, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Ортез оснащен двухосными анатомическими боковыми шинами, позволяющими постепенно и под контролем увеличивать диапазон движений сустава (15, 0,75 градусов), зубчатым механизмом, стягивающими лентами VELCRO и боковой динамичной пелотой коленной чашечки.

Ортез стабилизирует коленный сустав, стабилизирует скоку коленную чашечку и разгружает надколенно-бедренный сустав, разгружает прикрепления мышц; позволяет установить диапазон движений сустава (0,15,75 градусов). Благодаря поддержке стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшающее отеки; способствует рассасыванию выпотов и гематом вследствие перенесенных травм.



Показания

- после перенесенных травм коленного сустава с повреждением надколенно-бедренного сустава, не требующих оперативного лечения либо не классифицируются к нему (переломы коленной чашечки, повреждения связки надколенника)
- при прогрессирующих дегенеративных изменениях надколенно-бедренного сустава в сочетании с дегенеративными изменениями и/или неустойчивостью коленного сустава
- при хронической неустойчивости надколенника (привычные вывихи или вследствие перенесенных травм)
- при восстановлении после хирургического лечения коленного сустава, вследствие травм или болезней

Технические характеристик

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/2RA-OR, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 17 см, 5 см), Масса 0,397 кг
AM-OSK-Z/2RA-OR, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 19 см, 5 см), Масса 0,436 кг
AM-OSK-Z/2RA-OR, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 21 см, 5 см), Масса 0,484 кг
AM-OSK-Z/2RA-OR, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см), Масса 0,498 кг
AM-OSK-Z/2RA-OR, Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 25 см, 5 см), Масса 0,535 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-KD-AM/3-03														
Общее описание Изделие оснащено системой 4-точечной поддержки, обеспечивающей повышенную защиту коленного сустава. Ортез имеет трехосную направляющую без регулировки угла изгиба и разгибания. Наклонная форма рамы с внутренней стороны гарантирует комфорт при ношении ортеза, нивелируя риск повреждения второй конечности рамой ортеза. Внутренние монтируемые ремни и антискользящие подушки обеспечивают дополнительную поддержку для предотвращения скольжения ортеза. Показания • Умеренная или тяжелая нестабильность ACL, PCL, MCL и LCL, • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL, • Комбинированные травмы ACL/PCL, • Гиперплазия коленного сустава. Технические характеристики <table><tr><th>Размер S</th><th>Размер М</th><th>Размер L</th></tr><tr><td>Длина шины 44 см</td><td>Длина шины 53 см</td><td>Длина шины 59 см</td></tr><tr><td>Максимальная окружность бедра 50 см</td><td>Максимальная окружность бедра 55 см</td><td>Максимальная окружность бедра 60 см</td></tr><tr><td>Максимальная окружность голени 35 см</td><td>Максимальная окружность голени 40 см</td><td>Максимальная окружность голени 45 см</td></tr></table>		Размер S	Размер М	Размер L	Длина шины 44 см	Длина шины 53 см	Длина шины 59 см	Максимальная окружность бедра 50 см	Максимальная окружность бедра 55 см	Максимальная окружность бедра 60 см	Максимальная окружность голени 35 см	Максимальная окружность голени 40 см	Максимальная окружность голени 45 см	
Размер S	Размер М	Размер L												
Длина шины 44 см	Длина шины 53 см	Длина шины 59 см												
Максимальная окружность бедра 50 см	Максимальная окружность бедра 55 см	Максимальная окружность бедра 60 см												
Максимальная окружность голени 35 см	Максимальная окружность голени 40 см	Максимальная окружность голени 45 см												

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-АМ/3-03, Размер S	Д х Ш х Г (44 см, 25 см, 6 см), Масса 0,651 кг
АМ-KD-АМ/3-03, Размер М	Д х Ш х Г (53 см, 27,5 см, 6 см), Масса 0,7 кг
АМ-KD-АМ/3-03, Размер L	Д х Ш х Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

ЕВ-SKL/1R					
Общее описание Ортез закрытого типа ЕВ-SKL/1R – это медицинское изделие, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Изделие оснащено стягивающими лентами VELCRO и одноосными боковыми шинами, длиной 380 мм. Они изготовлены из пластика с добавлением углеродных волокон; регулировка угла сгибания и разгибания происходит с помощью специальных заклепок каждые 15 градусов. Ортез стабилизирует коленный сустав, разгружает прикрепления мышц; позволяет постепенно и контролируемо увеличивать диапазон движений сустава. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшающее отеки; способствует рассасыванию выпотов и гематом вследствие перенесенных травм.					
Показания • растяжения связок колена, • вывих коленного сустава, • боковая нестабильность коленного сустава, • травмы связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других хирургических операций (ортопедия)					
Технические характеристики					
Размер S Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Размер М Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44,5–48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Размер L Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48,5–52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Размер XL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52,5–56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Размер XXL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56,5–60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-SKL/1R, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 17 см, 5 см), Масса 0,448 кг
ЕВ-SKL/1R, Размер M	Д x Ш x Г (45 см, 19 см, 5 см), Масса 0,482 кг
ЕВ-SKL/1R, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 21 см, 5 см), Масса 0,518 кг
ЕВ-SKL/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 23 см, 5 см), Масса 0,554 кг
ЕВ-SKL/1R, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 25 см, 5 см), Масса 0,593 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-ZL/2RA-ACL

Общее описание

Изделие оснащено: стягивающими лентами VELCRO, динамичной системой укрепления передних крестообразных связок коленного сустава, двухосными анатомическими боковыми шинами длиной 380 мм, зубчатым механизмом и профилированным кольцом с противогрибковыми свойствами, отлично стабилизирующим коленную чашечку.

Ортез стабилизирует коленный сустав, разгружает прикрепления мышц; позволяет установить диапазон движений сустава (0,15,75 градусов). Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшающее отеки; способствует рассасыванию выпотов и гематом вследствие перенесенных травм.

Показания

- после оперативного и консервативного лечения повреждения крестообразных связок
- при прогрессирующих дегенеративных изменениях и/или неустойчивости коленного сустава вследствие перенесенных травм или болезней у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему
- после перенесенных травм коленного сустава, не требующих оперативного лечения либо не классифицирующихся к нему (растяжения с повреждением боковых и крестообразных связок, надрывы мышечных прикреплений)
- при восстановлении после хирургического лечения коленного сустава по причинам травм или болезней
- при парезе нижних конечностей для вертикализации и учения ходьбе



• для предупреждения и лечения контрактур коленного сустава по ортопедическим и неврологическим причинам				
Технические характеристики				
Размер S Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Размер M Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44,5–48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Размер L Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48,5–52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Размер XL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52,5–56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Размер XXL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56,5–60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2RA-ACL, Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 23 см, 5 см), Масса 0,322 кг
AM-OSK-ZL/2RA-ACL, Размер M	Д x Ш x Г (42 см, 25,5 см, 5 см), Масса 0,357 кг
AM-OSK-ZL/2RA-ACL, Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 28 см, 5 см), Масса 0,397 кг
AM-OSK-ZL/2RA-ACL, Размер XL	Д x Ш x Г (46 см, 30,5 см, 5 см), Масса 0,436 кг
AM-OSK-ZL/2RA-ACL, Размер XXL	Д x Ш x Г (48 см, 33 см, 5 см), Масса 0,480 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-KD-AM/2R-03	
Общее описание Изделие оснащено системой 4-точечной поддержки, обеспечивающей повышенную защиту коленного сустава. В зависимости от необходимости ортез оснащен двухосной полицентрической рейкой с регулировкой угла изгиба и разгибания каждые 20 градусов-2R. Наклонная форма рамы с внутренней стороны гарантирует комфорт при ношении ортеза, нивелируя риск повреждения второй конечности рамой ортеза. Внутренние монтируемые ремни и антискользящие подушки обеспечивают дополнительную поддержку для предотвращения скольжения ортеза.	

Показания • Умеренная или тяжелая нестабильность ACL, PCL, MCL и LCL, • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL, • Комбинированные травмы ACL/PCL, • Гиперплазия коленного сустава, • Деформация и вальгусность колена.		
Технические характеристики		
Размер S Длина шины 44 см Максимальная окружность бедра 50 см Максимальная окружность голени 35 см	Размер M Длина шины 53 см Максимальная окружность бедра 55 см Максимальная окружность голени 40 см	Размер L Длина шины 59 см Максимальная окружность бедра 60 см Максимальная окружность голени 45 см

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-АМ/2R-03, Размер S	Д x Ш x Г (44 см, 26 см, 6 см), Масса 0,729 кг
АМ-KD-АМ/2R-03, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 29 см, 6 см), Масса 0,810 кг
АМ-KD-АМ/2R-03, Размер L	Д x Ш x Г (59 см, 32 см, 6 см), Масса 0,900 кг

АМ-KD-DAM/1R	
Общее описание Основу изделия представляет собой ортопедическая шина 1R из прочного пластика и углеродного волокна, которая оснащена механизмом регулировки угла сгибания с шагом в 15 градусов. Настройка механизма осуществляется с помощью имбусовых шурупов (имбусовый ключ входит в комплектацию), что защищает изделие от случайных изменений настройки. Шина фиксируется на двух модулях – текстильных рукавах в области бедра и голени.	
Показания Детский аппарат можно использовать в случаях: • вывихов коленного сустава, • растяжений коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, • после реконструкции коленных связок • после других операций (ортопедия)	

Технические характеристики			
Размер 1 Обхват бедра 22 — 50 см Обхват голени 20 — 35 см Полная длина изделия 29 см	Размер 2 Обхват бедра 22 — 53 см Обхват голени 20 — 38 см Полная длина изделия 32 см	Размер 3 Обхват бедра 24 — 55 см Обхват голени 22 — 41 см Полная длина изделия 42 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-DAM/1R, Размер 1	Д x Ш x Г (34 см, 22 см, 6 см), Масса 0,367 кг
АМ-KD-DAM/1R, Размер 2	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 6 см), Масса 0,408 кг
АМ-KD-DAM/1R, Размер 3	Д x Ш x Г (47 см, 24 см, 6 см), Масса 0,491 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-KDS-AJ/2R	
Общее описание Ортез имеет конструкцию, совмещающую функции открытых ортезов — простоту наложения благодаря тому, что его не нужно натягивать через стопу, как и закрытых — полная стабилизация надколенника и коленного сустава, для чего в ортезе имеется анатомической формы кольцо надколенника. Ортез открытый с тыльной стороны колена, что увеличивает комфорт. Ортез имеет два набора обводящих ремней и пластиковые держатели ортопедических шин. Показания Ортез АМ-KDS-AJ/2R можно применять в случае: • вывихов коленного сустава, • растяжения связок колена, • боковая нестабильность коленного сустава, • травмы связок колена LCL, MCL и ACL, • после артроскопии коленного сустава	

• после других ортопедических операций • подвывих надколенника (привычные, травматические). Технические характеристики				
Размер S Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	Размер M Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–38 см	Размер L Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38–42 см	Размер XL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–46 см	Размер XXL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46–50 см

Габаритные размеры и масса

АМ-KDS-AJ/2R, Размер S	Д x Ш x Г (51,5 см, 26 см, 8 см), Масса 0,945 кг
АМ-KDS-AJ/2R, Размер M	Д x Ш x Г (56 см, 29 см, 8 см), Масса 1,050 кг
АМ-KDS-AJ/2R, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 32 см, 8 см), Масса 1,167 кг
АМ-KDS-AJ/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (63 см, 35 см, 8 см), Масса 1,248 кг
АМ-KDS-AJ/2R, Размер XXL	Д x Ш x Г (65 см, 38 см, 8 см), Масса 1,374 кг

Общее описание

Шино-повязочный аппарат нижней конечности изготовлен из:

- Двух открытых рукавов – бедра и голени.
- Ортопедических шин с системой их фиксации.
- Набора лент VELCRO.

Изделие оснащено одноосными боковыми шинами, изготовленными из пластика, армированного углеродными волокнами. Шины снабжены специальными часами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания по 15 градусов.

Ортез стабилизирует и разгружает коленный сустав; позволяет постепенно и под контролем увеличивать диапазон движений сустава; легко прилегает к конечности даже у людей с диспропорцией окружностей бедра и голени или при значительно утолщенном контуре коленного сустава.



Показания

- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики)
- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют оперативного лечения или не классифицируются к нему
- в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов
- для профилактики и лечения контрактур коленного сустава вызванных парезом или болезненными изменениями

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L
Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки 44-52 см	Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см	Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки 52-60 см
Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной	Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной	Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной

чашечки 34-42 см Расстояние от колена до паха 21,5 см	чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 25,5 см	чашечки 42-50 см Расстояние от колена до паха 28,5 см	
---	---	---	--

Габаритные размеры и масса

АМ-KD-АМ/1R, Размер S	Д x Ш x Г (44 см, 22 см, 6 см), Масса 0,590 кг
АМ-KD-АМ/1R, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 29 см, 6 см), Масса 0,678 кг
АМ-KD-АМ/1R, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,753 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-KD-АМ/2R	
Общее описание Высокий уровень стабилизации коленного сустава по горизонтальной оси в данной модели достигается с помощью двусных полицентричных шин 2R, которые удерживают сустав в естественно правильном положении по бокам конечности. И механической системой контроля движения, динамика которой схожа с анатомическими движениями колена. Благодаря усиленной боковой стабилизации, коленный сустав находится в анатомически правильном положении, а механизм с зубчатой передачей позволяет пошагово увеличивать угол сгибания колена. Показания • в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики) • в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют оперативного лечения или не классифицируются к нему • в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов • для профилактики и лечения контрактур коленного сустава вызванных парезом или болезненными изменениями	

Технические характеристики			
Размер S Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки 44-75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки 34-55 см Расстояние от колена до паха 21,5 см	Размер M Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки 44-75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки 34-55 см Расстояние от колена до паха 25,5 см	Размер L Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки 44-75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки 34-55 см Расстояние от колена до паха 28,5 см	

Габаритные размеры и масса

AM-KD-AM/2R, Размер S	Д x Ш x Г (46,5 см, 32 см, 6 см), Масса 0,753 кг
AM-KD-AM/2R, Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 32 см, 6 см), Масса 0,837 кг
AM-KD-AM/2R, Размер L	Д x Ш x Г (59 см, 32 см, 6 см), Масса 0,900 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-KD-AM/2R-02

Общее описание

Шино-повязочный аппарат нижней конечности выполнен из:

- Два открытых рукава – бедра и голени
- Ортопедические шины с системой их крепления.
- Набор липучек.
- Капы переднего коленного сустава.

Изделие оснащено двумя двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом и регулировкой угла изгиба и разгибания, изготовленными из алюминиевого сплава с горячим прочным порошковым покрытием. Шины обеспечивают боковую стабилизацию конечности, а установленная в них система независимого крепления их к рукавам бедра и голени позволяет индивидуально, легко и точно выбрать место крепления шин к мягкой части аппарата. Аппарат оснащен коленной чашечкой, предназначенной для лучшей стабилизации передней части коленного сустава, что позволяет использовать аппарат для ранней вертикализации пациентов с параличом нижних конечностей.



Показания

- парезы одной или обеих нижних конечностей для вертикализации и обучения ходьбе
- в качестве иммобилизации и в реабилитации после перенесенных травм коленного сустава, не требующих или не квалифицированных для оперативного лечения
- для профилактики и лечения контрактур коленного сустава, вызванных парезом или поражениями

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-75 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-75 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-75 см
окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-55 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-55 см	окружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-55 см
длина шины 38 см	длина шины 47 см	длина шины 53 см

Габаритные размеры и масса

AM-KD-AM/2R-02, Размер S

Д x Ш x Г (42 см, 32 см, 8 см), Масса 0,872 кг

AM-KD-AM/2R-02, Размер M	Д x Ш x Г (54 см, 32 см, 8 см), Масса 1,050 кг
AM-KD-AM/2R-02, Размер L	Д x Ш x Г (61 см, 32 см, 8 см), Масса 1,167 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-TUD-KD				
Общее описание Обездвиживающий нижнюю конечность ортез изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью со свойствами липучки. Тунор оснащен: 1. Открытым мягким рукавом, позволяющим приспособить изделие к разным окружностям нижней конечности. 2. Системой лент VELCRO, обеспечивающих надлежащее прилегание изделия к телу и эффективную фиксацию охраняемой конечности. 3. Системой анатомически профилированных алюминиевых шин с комплектом независимого крепления к рукаву тунора. Показания Тунор можно использовать в случаях: • вывихов коленного сустава, • растяжений коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, • после реконструкции коленных связок, • в ранний период после других операций коленного сустава, • после других операций (ортопедия) Технические характеристики				
Размер S Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см Длина изделия 40 см	Размер M Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–38 см Длина изделия 50 см	Размер L Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38–42 см Длина изделия 60 см	Размер XL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–46 см Длина изделия 70 см	Размер XXL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46–50 см Длина изделия 70 см

Габаритные размеры и масса

АМ-TUD-KD, Размер S	Д x Ш x Г (50 см, 25,5 см, 5 см), Масса 0,651 кг
АМ-TUD-KD, Размер M	Д x Ш x Г (60 см, 27,5 см, 5 см), Масса 0,707 кг
АМ-TUD-KD, Размер L	Д x Ш x Г (70 см, 30 см, 5 см), Масса 0,769 кг
АМ-TUD-KD, Размер XL	Д x Ш x Г (80 см, 32,5 см, 5 см), Масса 0,831 кг
АМ-TUD-KD, Размер XXL	Д x Ш x Г (80 см, 35 см, 5 см), Масса 0,897 кг

АМ-TUD-KD (детский)

Общее описание

Иммобилизирующий детский ортез нижней конечности — тугор Am-tud-kd предназначен для обездвиживания и стабилизации коленного сустава.

Конструкция тугора представляет собой многослойный рукав с фиксирующими элементами. Ортез оснащен двумя комплектами дюралевых шин (задние 2 шт. и боковые 2 шт.), которые стабилизируют и обездвиживают коленный сустав. Ленточные ремни с застежкой-липучкой Велкро, позволяют регулировать степень жесткости и фиксацию ортеза на конечности.

Показания

- Растяжения и вывихи
- Послеоперационный период реабилитации
- Нестабильность сустава (боковая)
- Повреждения связок

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват бедра 28-36 см	Обхват бедра 36-40 см	Обхват бедра 40-44 см
Обхват голени 20-26 см	Обхват голени 26-30 см	Обхват голени 30-34 см
Длина шин 28 см	Длина шин 30 см	Длина шин 33 см



Габаритные размеры и масса

АМ-TUD-KD (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (32 см, 16 см, 3 см), Масса 0,258 кг
АМ-TUD-KD (детский), Размер 2	Д x Ш x Г (34 см, 19 см, 3 см), Масса 0,287 кг
АМ-TUD-KD (детский), Размер 3	Д x Ш x Г (37 см, 21 см, 3 см), Масса 0,316 кг

Общее описание

Тутор оснащен:

1. Открытым мягким рукавом, позволяющим приспособить изделие к разным окружностям нижней конечности.
2. Системой лент VELCRO, обеспечивающих надлежащее прилегание изделия к телу и более эффективную фиксацию охраняемой конечности.
3. Системой анатомически профилированных алюминиевых шин с комплектом независимого крепления к рукаву тутора.
4. Плащом стабилизирующим коленный сустав спереди с регулировкой его застегивания.



Показания

Тутор можно использовать в случаях:

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- переднемедиальной нестабильности колена
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок, в ранний период после других операций коленного сустава,
- ранней вертикализации больного

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см	Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30–34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34–38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38–42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42–46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46–50 см
Длина изделия 40 см	Длина изделия 50 см	Длина изделия 60 см	Длина изделия 70 см	Длина изделия 70 см

Габаритные размеры и масса

AM-TUD-KD-02, Размер S	Д x Ш x Г (50 см, 26 см, 6 см), Масса 0,702 кг
AM-TUD-KD-02, Размер M	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 6 см), Масса 0,780 кг
AM-TUD-KD-02, Размер L	Д x Ш x Г (70 см, 32 см, 6 см), Масса 0,867 кг
AM-TUD-KD-02, Размер XL	Д x Ш x Г (80 см, 35 см, 6 см), Масса 0,953 кг
AM-TUD-KD-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (80 см, 38 см, 6 см), Масса 0,990 кг

АМ-TUD-KD-02 (детский)

Общее описание

Основными особенностями изделия являются две пары ортопедических шин анатомической формы (2 –задние, 2 –боковые) – стабилизация сустава в боковых и центральной областях. Независимые крепления шин позволяют применять изделие, как с полной иммобилизацией, так и с частичной. В итоге, один ортез может использоваться на массах период реабилитации. Фиксирующие ремни на застежке Велкро (липучке) позволяют регулировать компрессию и подогнать размер под индивидуальные параметры.

Отверстие над коленной чашечкой, закрывается передним коленным плащом с регулируемой системой креплений. Перекрещенные эластичные ремни обеспечивают дополнительную стабилизацию сустава в центральной части.

Показания

Тутор можно использовать в случаях:

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- переднемедиальной нестабильности колена
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок, в ранний период после других операций коленного сустава,
- ранней вертикализации больного

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват бедра 28-36 см	Обхват бедра 36-40 см	Обхват бедра 40-44 см
Обхват голени 20-26 см	Обхват голени 26-30 см	Обхват голени 30-34 см
Длина шин 28 см	Длина шин 30 см	Длина шин 33 см



Габаритные размеры и масса

АМ-TUD-KD-02 (детский), Размер 1	Д х Ш х Г (32 см, 16 см, 5 см), Масса 0,278 кг
АМ-TUD-KD-02 (детский), Размер 2	Д х Ш х Г (34 см, 19 см, 5 см), Масса 0,305 кг
АМ-TUD-KD-02 (детский), Размер 3	Д х Ш х Г (37 см, 21 см, 5 см), Масса 0,331 кг

AM-OSK-Z/1R

Общее описание

Ортез оснащен двумя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано одноосными боковыми шинами, изготовленными из ластика, армированного углеродными волокнами. Шины снабжены специальными шарнирами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания каждые 15 градусов. Такая точная регулировка изделия решительно облегчает процесс восстановления поврежденного коленного сустава.

Показания

Ортез можно использовать в случаях:

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)
- подвывихи коленной чашечки – привычные, после травм



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/1R, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 21 см, 4 см), Масса 0,352 кг
AM-OSK-Z/1R, Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 23,5 см, 4 см), Масса 0,378 кг
AM-OSK-Z/1R, Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 26 см, 4 см), Масса 0,407 кг
AM-OSK-Z/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 28,5 см, 4 см), Масса 0,435 кг
AM-OSK-Z/1R, Размер 2XL	Д x Ш x Г (33 см, 31 см, 4 см), Масса 0,466 кг
AM-OSK-Z/1R, Размер 3XL	Д x Ш x Г (33 см, 33,5 см, 4 см), Масса 0,499 кг
AM-OSK-Z/1R, Размер 4XL	Д x Ш x Г (33 см, 36 см, 4 см), Масса 0,533 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-O/1R

Общее описание

Модель AM-OSK-O/1R стабилизирует сустав и дает возможность пошагово увеличивать угол сгибания. Такая технология ускоряет восстановление двигательных функций, не позволяет перегружать сустав и защищает от повторного травмирования. Модель можно использовать в лечебных и профилактических целях.

Конструкция ортеза состоит из:

- Текстильный рукав. Дизайн рукава позволяет подогнать объем с помощью регулировки клапанов на липучке. Изделие надевается в нахлест, что облегчает наложение/снятие. Дополнительные ремни на липучках обеспечивают усиленную фиксацию.
- Жесткие элементы конструкции - ортопедические шины из алюминиевого сплава и механизм регулировки угла сгибания, обеспечивают усиленную боковую стабилизацию. Специальные крепления позволяют демонтировать шины и использовать изделие в легкой форме. Регулировка диапазона сгибания (с шагом 15 градусов) осуществляется с помощью стальных заклепок и магнита, которые входят в комплектацию.



Показания

Ортез можно использовать в случаях:

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см	46,5-50 см	50,5-55 см	55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-O/1R, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 21,5 см, 4 см), Масса 0,365 кг
AM-OSK-O/1R, Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 24 см, 4 см), Масса 0,398 кг
AM-OSK-O/1R, Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 26,5 см, 4 см), Масса 0,448 кг

AM-OSK-O/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 29 см, 4 см), Масса 0,457 кг
AM-OSK-O/1R, Размер 2XL	Д x Ш x Г (33 см, 31,5 см, 4 см), Масса 0,481 кг
AM-OSK-O/1R, Размер 3XL	Д x Ш x Г (33 см, 34 см, 4 см), Масса 0,536 кг
AM-OSK-O/1R, Размер 4XL	Д x Ш x Г (33 см, 36,5 см, 4 см), Масса 0,561 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-Z/2R						
Общее описание Ортез закрытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью. Изделие оснащено независимыми усилительными ремнями, изготовленными из ткани VELCRO, и двухосными алюминиевыми полицентрическими боковыми направляющими с регулировкой угла сгибания и разгибания коленного сустава каждые 20 градусов. Благодаря использованию профилированных силиконовых чехлов под механизмом шины отлично стабилизируют коленный сустав боком. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, ортез оказывает обезболивающее, уменьшающее отечность действие, а также облегчает всасывание экссудатов и гематом после перенесенных травм. Показания • после травм колена (растяжения связок, травмы сухожилий) • хроническая нестабильность колена (медиальная или боковая) • дегенерация коленного сустава • после операций на коленном суставе. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/2R, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 18,5 см, 6 см), Масса 0,476 кг
AM-OSK-Z/2R, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 20,5 см, 6 см), Масса 0,512 кг

АМ-ОСК-З/2R, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 6 см), Масса 0,55 кг
АМ-ОСК-З/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 25,5 см, 6 см), Масса 0,589 кг
АМ-ОСК-З/2R, Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 28 см, 6 см), Масса 0,63 кг
АМ-ОСК-З/2R, Размер XXXL	Д x Ш x Г (32 см, 30,5 см, 6 см), Масса 0,674 кг
АМ-ОСК-З/2R, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (32 см, 33,5 см, 6 см), Масса 0,721 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

АМ-ОСК-З/2R-02						
Общее описание Ортез закрытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью. Изделие оборудовано двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом и часами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания по 20 градусов. Шины изготовлены из сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой. Такая точная регулировка изделия решительно облегчает процесс восстановления поврежденного коленного сустава. Показания • после травм колена (растяжения связок, травмы сухожилий) • хроническая нестабильность колена (медиальная или боковая) • дегенерация коленного сустава • после операций на коленном суставе. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОСК-З/2R-02, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 18,5 см, 6 см), Масса 0,476 кг
АМ-ОСК-З/2R-02, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 20,5 см, 6 см), Масса 0,512 кг
АМ-ОСК-З/2R-02, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 6 см), Масса 0,55 кг

AM-OSK-Z/2R-02, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 25,5 см, 6 см), Масса 0,589 кг
AM-OSK-Z/2R-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 28 см, 6 см), Масса 0,63 кг
AM-OSK-Z/2R-02, Размер XXXL	Д x Ш x Г (32 см, 30,5 см, 6 см), Масса 0,674 кг
AM-OSK-Z/2R-02, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (32 см, 33,5 см, 6 см), Масса 0,721 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-OSK-O/2R						
Общее описание Изделие оборудовано двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом и часами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания по 20 градусов. Шины изготовлены из сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой. Такая точная регулировка изделия решительно облегчает процесс восстановления поврежденного коленного сустава. Шины 2R – это двухосные полицентрические, оснащенные зубчатым механизмом шины, движение которых при сгибании и разгибании оптимально похоже на анатомическое движение коленного сустава. Показания • после травм колена (растяжения связок, травмы сухожилий) • хроническая нестабильность колена (медиальная или боковая) • дегенерация коленного сустава • после операций на коленном суставе. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-O/2R, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 19,5 см, 5 см), Масса 0,526 кг
AM-OSK-O/2R, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 21,5 см, 5 см), Масса 0,566 кг
AM-OSK-O/2R, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 24 см, 5 см), Масса 0,609 кг

AM-OSK-O/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 26,5 см, 5 см), Масса 0,652 кг
AM-OSK-O/2R, Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 29 см, 5 см), Масса 0,697 кг
AM-OSK-O/2R, Размер XXXL	Д x Ш x Г (32 см, 32 см, 5 см), Масса 0,746 кг
AM-OSK-O/2R, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (32 см, 35 см, 5 см), Масса 0,798 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-OSK-ZJ/2R					
Общее описание Ортез закрытого типа, изготовлен из эластичной ткани, которая отводит влагу и тепло из кожи пациента. Ортез оснащен двумя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано двухосной боковой шиной с возможностью регулировки угла сгибания и разгибания по 20 градусов и с зубчатым механизмом; шина изготовлена из сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой. Расположение шины в ортезе защищает коленный сустав и позволяет получить превосходную его фиксацию. Применение в шинном изгибе анатомической накладки, сделанной из гибкого пластика, способствует более точному прилеганию шины к боковой части колена.					
Показания Ортез можно использовать в случаях: • вывихов коленного сустава, • растяжений коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, • после реконструкции коленных связок, • после других операций (ортопедия) • особенно ортез полезен при занятиях спортом					
Технические характеристики					
Размер S Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40–44 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Размер М Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44–48 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	Размер L Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48–52 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	Размер XL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52–56 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	Размер XXL Обхват бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56–60 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46-50 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZJ/2R, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 16 см, 12 см), Масса 0,375 кг
AM-OSK-ZJ/2R, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 18 см, 12 см), Масса 0,403 кг
AM-OSK-ZJ/2R, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 20 см, 12 см), Масса 0,433 кг
AM-OSK-ZJ/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 22 см, 12 см), Масса 0,463 кг
AM-OSK-ZJ/2R, Размер XXL	Д x Ш x Г (35 см, 24 см, 12 см), Масса 0,496 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-OSK-Z/1						
Общее описание Ортез оснащенный анатомически профилированным кольцом, обездвиживающим коленную чашечку и одноосными боковыми шинами [1] – это одноосные ортопедические шины, которые прежде всего используются во всех ортезах коленного сустава и верхней конечности в тех случаях, когда не требуется прочное боковое обездвиживание сустава, в то время как придается значение малому массе изделия. Ортез стабилизирует коленный сустав и надколенник, разгружает прикрепления мышц и надколенно-бедренный сустав. Благодаря своему строению ортез очень легко накладывается и снимается с коленного сустава. Показания • при прогрессирующих дегенеративных изменениях и/или неустойчивости сустава, вследствие перенесенных травм или болезненных состояний – у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему. • для профилактики в занятиях спортом. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см	50-55 см	55-59 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОСК-З/1, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 21 см, 4 см), Масса 0,32 кг
АМ-ОСК-З/1, Размер М	Д x Ш x Г (34 см, 23,5 см, 4 см), Масса 0,344 кг
АМ-ОСК-З/1, Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 26 см, 4 см), Масса 0,37 кг
АМ-ОСК-З/1, Размер XL	Д x Ш x Г (34 см, 28,5 см, 4 см), Масса 0,396 кг
АМ-ОСК-З/1, Размер 2XL	Д x Ш x Г (34 см, 31 см, 4 см), Масса 0,424 кг
АМ-ОСК-З/1, Размер 3XL	Д x Ш x Г (34 см, 33,5 см, 4 см), Масса 0,453 кг
АМ-ОСК-З/1, Размер 4XL	Д x Ш x Г (34 см, 36 см, 4 см), Масса 0,485 кг

АМ-ОСК-О/1

Общее описание

Ортез открытого типа АМ-ОСК-О/1 – это улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Обездвиживает коленный сустав, разгружает прикрепления мышц. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он утоляет боль, уменьшает отеки, способствует рассасыванию выпотов и гематом после перенесенных травм. Особенно рекомендуется людям с диспропорцией окружностей бедра и голени, со значительным увеличением контура коленного сустава, с трудностями при самостоятельном наложении ортеза (усиленные недомогания в тазобедренном суставе и позвоночнике, значительная полнота, нарушение ловкости рук), пожилым людям, которым ортез накладывается только для ходьбы, лицами, ухаживающими за ними.

Показания

- при прогрессирующих дегенеративных изменениях и/или неустойчивости сустава, вследствие перенесенных травм или болезненных состояний – у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему
- после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют хирургического лечения либо не классифицируются к нему

Технические характеристики



Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват	Обхват	Обхват	Обхват

колена	колена	колена	колена	колена	колена	колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см	50-55 см	55-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-O/1, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см), Масса 0,385 кг
AM-OSK-O/1, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 24,5 см, 5 см), Масса 0,414 кг
AM-OSK-O/1, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 27 см, 5 см), Масса 0,445 кг
AM-OSK-O/1, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 29,5 см, 5 см), Масса 0,476 кг
AM-OSK-O/1, Размер 2XL	Д x Ш x Г (32 см, 32 см, 5 см), Масса 0,509 кг
AM-OSK-O/1, Размер 3XL	Д x Ш x Г (32 см, 34,5 см, 5 см), Масса 0,545 кг
AM-OSK-O/1, Размер 4XL	Д x Ш x Г (32 см, 37 см, 5 см), Масса 0,583 кг

AM-OSK-Z/2

Общее описание

Закрытый наколенник изготовлен из перфорированной неопреновой пены, которая покрыта подкладочной тканью. Он содержит два независимых поддерживаемых набора лент на липучке. Устройство оснащено двумя 2-осевыми боковыми шинами, изготовленными из высококачественного алюминиевого сплава, поэтому они легкие и прочные и гарантируют правильное функционирование изделия. Точная подгонка средств реабилитации. Внутренняя перфорация позволяет коже дышать и снижает перегрев. Использование анатомической опоры надколенника из пены с антимикотическими свойствами обеспечивает максимальную стабилизацию надколенно-бедренного сустава.

Показания

- после травм колена (растяжения связок, травмы сухожилий)
- хроническая нестабильность колена (медиальная или боковая)
- дегенерация коленного сустава
- после операций на коленном суставе

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОСК-Z/2, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 21 см, 5 см), Масса 0,421 кг
АМ-ОСК-Z/2, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 23,5 см, 5 см), Масса 0,454 кг
АМ-ОСК-Z/2, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 26 см, 5 см), Масса 0,482 кг
АМ-ОСК-Z/2, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 28,5 см, 5 см), Масса 0,512 кг
АМ-ОСК-Z/2, Размер 2XL	Д x Ш x Г (32 см, 31 см, 5 см), Масса 0,549 кг

АМ-ОСК-Z/2-02				
Общее описание Ортез закрытого типа АМ-ОСК-Z/2РА-ОР – это профессиональное медицинское изделие 1-го класса, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Ортез оснащен двухосными анатомическими боковыми шинами, позволяющими постепенно и под контролем увеличивать диапазон движений сустава (15, 0,75 градусов), зубчатым механизмом, стягивающими лентами VELCRO и боковой динамичной пелотой коленной чашечки. Показания • после перенесенных травм коленного сустава с повреждением надколенно-бедренного сустава, не требующих оперативного лечения либо не классифицируются к нему (переломы коленной чашечки, повреждения связки надколенника) • при прогрессирующих дегенеративных изменениях надколенно-бедренного сустава в сочетании с дегенеративными изменениями и/или неустойчивостью коленного сустава • при хронической неустойчивости надколенника (привычные вывихи или вследствие перенесенных травм) • при восстановлении после хирургического лечения коленного сустава, вследствие травм или болезней. Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL

Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/2-02, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 21 см, 5 см), Масса 0,421 кг
AM-OSK-Z/2-02, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 23,5 см, 5 см), Масса 0,454 кг
AM-OSK-Z/2-02, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 26 см, 5 см), Масса 0,482 кг
AM-OSK-Z/2-02, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 28,5 см, 5 см), Масса 0,512 кг
AM-OSK-Z/2-02, Размер 2XL	Д x Ш x Г (32 см, 31 см, 5 см), Масса 0,549 кг

AM-OSK-O/2

Общее описание

Ортез открытого типа AM-OSK-O/2 – это медицинское изделие, улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Ортез оснащен независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO и двухосными боковыми шинами без регулировки угла сгибания и разгибания. Обездвиживает коленный сустав, разгружает прикрепления мышц. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он утоляет боль, уменьшает отеки, способствует рассасыванию выпотов и гематом после перенесенных травм.

Показания

- при прогрессирующих дегенеративных изменениях и/или неустойчивости сустава, вследствие перенесенных травм или болезненных состояний – у лиц, которые не выражают согласие на операционное лечение либо не классифицируются к нему
- после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют хирургического лечения либо не классифицируются к нему.

Технические характеристики

Подходит для обоих колен

Общая длина изделия:

S — 4XL: 36 см



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см	50-55 см	55-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-O/2, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см), Масса 0,424 кг
AM-OSK-O/2, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 25 см, 5 см), Масса 0,446 кг
AM-OSK-O/2, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 28 см, 5 см), Масса 0,490 кг
AM-OSK-O/2, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 31 см, 5 см), Масса 0,526 кг
AM-OSK-O/2, Размер 2XL	Д x Ш x Г (32 см, 34 см, 5 см), Масса 0,561 кг
AM-OSK-O/2, Размер 3XL	Д x Ш x Г (32 см, 37 см, 5 см), Масса 0,600 кг
AM-OSK-O/2, Размер 4XL	Д x Ш x Г (32 см, 40 см, 5 см), Масса 0,642 кг

AM-OSK-ZL/1R

Общее описание

Данная модель является закрытым ортезом и не имеет подколенной выемки. Вспомогательными стабилизирующими элементами являются две пары ленточных ремней на застежке велкро (липучке). Эргономичное отверстие надколенника, усилено двойным слоем пенки по периметру, что дает дополнительную поддержку. И в заключении, еще одно достоинство данного изделия – простота. Ортез не требует особых навыков при надевании и снятии. Особенность данной модели – наличие пары ортопедических планок (шин) 1R, которые выполняют функцию боковой стабилизации.

Показания

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)
- подвывихи коленной чашечки – привычные, после травм

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см	46-50 см	50-55 см	55-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/1R, Размер S	Д x Ш x Г (46 см, 22 см, 5 см), Масса 0,414 кг
AM-OSK-ZL/1R, Размер M	Д x Ш x Г (46 см, 24,5 см, 5 см), Масса 0,445 кг
AM-OSK-ZL/1R, Размер L	Д x Ш x Г (46 см, 27 см, 5 см), Масса 0,479 кг
AM-OSK-ZL/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (46 см, 29,5 см, 5 см), Масса 0,513 кг
AM-OSK-ZL/1R, Размер 2XL	Д x Ш x Г (46 см, 32,5 см, 5 см), Масса 0,547 кг
AM-OSK-ZL/1R, Размер 3XL	Д x Ш x Г (46 см, 36 см, 5 см), Масса 0,587 кг
AM-OSK-ZL/1R, Размер 4XL	Д x Ш x Г (46 см, 39,5 см, 5 см), Масса 0,628 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-OL/1R	
Общее описание Ортез оснащен четырьмя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано одноосными боковыми шинами, изготовленными из высококачественного пластика, армированного углеродными волокнами. Положение шин в ортезе и их особая эластичность способствует надлежащему прилеганию ортеза к охраняемой конечности и позволяет достигнуть отличной стабилизации оберегаемого сустава. Шины снабжены специальными часами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания каждые 15 градусов. Такая точная регулировка изделия решительно облегчает процесс восстановления поврежденного коленного сустава.	

Показания • вывихов коленного сустава, • растяжений коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, • после реконструкции коленных связок, • после других операций (ортопедия)						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см	мин 60 см - макс 64 см	мин 64 см - макс 68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см	мин 50 см - макс 54 см	мин 54 см - макс 58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-OL/1R, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 22 см, 5 см), Масса 0,494 кг
AM-OSK-OL/1R, Размер M	Д x Ш x Г (45 см, 24,5 см, 5 см), Масса 0,525 кг
AM-OSK-OL/1R, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 27 см, 5 см), Масса 0,566 кг
AM-OSK-OL/1R, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 29,5 см, 5 см), Масса 0,603 кг
AM-OSK-OL/1R, Размер 2XL	Д x Ш x Г (45 см, 32,5 см, 5 см), Масса 0,647 кг
AM-OSK-OL/1R, Размер 3XL	Д x Ш x Г (45 см, 36 см, 5 см), Масса 0,697 кг
AM-OSK-OL/1R, Размер 4XL	Д x Ш x Г (45 см, 39,5 см, 5 см), Масса 0,748 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.
Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSK-ZL/2R						
Общее описание Ортез закрытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью. Ортез оснащен четырьмя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания каждые 20 градусов.						
Показания - вывихов коленного сустава, - растяжений коленного сустава, - боковой нестабильности колена, - повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, - после реконструкции коленных связок, - после других операций (ортопедия)						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см	мин 60 см - макс 64 см	мин 64 см - макс 68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см	мин 50 см - макс 54 см	мин 54 см - макс 58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2R, Размер S	Д x Ш x Г (44 см, 23,5 см, 6 см), Масса 0,617 кг
------------------------	--

АМ-ОСК-ZL/2R, Размер М	Д x Ш x Г (44 см, 26 см, 6 см), Масса 0,663 кг
АМ-ОСК-ZL/2R, Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 28 см, 6 см), Масса 0,713 кг
АМ-ОСК-ZL/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (44 см, 30 см, 6 см), Масса 0,763 кг
АМ-ОСК-ZL/2R, Размер 2XL	Д x Ш x Г (44 см, 32,5 см, 6 см), Масса 0,816 кг
АМ-ОСК-ZL/2R, Размер 3XL	Д x Ш x Г (44 см, 35 см, 6 см), Масса 0,873 кг
АМ-ОСК-ZL/2R, Размер 4XL	Д x Ш x Г (44 см, 38 см, 6 см), Масса 0,935 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

АМ-ОСК-ZL/2R-02						
Общее описание Изделие оборудовано двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом и часами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания каждые 20 градусов. Шины изготовлены из высококачественного сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой. Расположение шин в виде буквы Х и их длина способствуют надлежащему прилеганию изделия к охраняемой конечности, и это позволяет достигнуть отличной фиксации оберегаемого сустава. Ортез оснащен четырьмя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO, а также задним перекрестным застегиванием, способствующим работе крестообразных связок. Показания - вывихов коленного сустава, - растяжений коленного сустава, - боковой нестабильности колена, - повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, - после реконструкции коленных связок, - после других операций (ортопедия). Технические характеристики						
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки

40 - 44 см	44 - 48 см	48 - 52 см	52 - 56 см	56 - 60 см	60,5 - 64 см	64,5 - 68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чаш	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
30 - 34 см	34,5 - 38 см	38,5 - 42 см	42,5 - 46 см	46,5 - 50 см	50,5 - 54 см	54,5 - 58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2R-02, Размер S	Д x Ш x Г (46 см, 23 см, 6 см), Масса 0,667 кг
AM-OSK-ZL/2R-02, Размер M	Д x Ш x Г (46 см, 25 см, 6 см), Масса 0,716 кг
AM-OSK-ZL/2R-02, Размер L	Д x Ш x Г (46 см, 27 см, 6 см), Масса 0,770 кг
AM-OSK-ZL/2R-02, Размер XL	Д x Ш x Г (46 см, 29 см, 6 см), Масса 0,824 кг
AM-OSK-ZL/2R-02, Размер 2XL	Д x Ш x Г (46 см, 31,5 см, 6 см), Масса 0,882 кг
AM-OSK-ZL/2R-02, Размер 3XL	Д x Ш x Г (46 см, 34 см, 6 см), Масса 0,943 кг
AM-OSK-ZL/2R-02, Размер 4XL	Д x Ш x Г (46 см, 37 см, 6 см), Масса 1,009 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-OSK-OL/2R	
Общее описание Ортез оснащен четырьмя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано двухосными боковыми шинами 2R позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания по 20 градусов. Это двухосные полицентрические шины. Благодаря применению зубчатого механизма, движение изгиба и разгибания которого оптимально совпадает с анатомическим движением коленного сустава. Возможность использования ортеза людьми в преклонном возрасте или с избыточным массаом. Показания - вывихов коленного сустава, - растяжений коленного сустава, - боковой нестабильности колена,	

- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см	мин 60 см - макс 64 см	мин 64 см - макс 68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см	мин 50 см - макс 54 см	мин 54 см - макс 58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-OL/2R, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 25,5 см, 6 см), Масса 0,674 кг
AM-OSK-OL/2R, Размер M	Д x Ш x Г (45 см, 27,5 см, 6 см), Масса 0,719 кг
AM-OSK-OL/2R, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 30 см, 6 см), Масса 0,776 кг
AM-OSK-OL/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 32,5 см, 6 см), Масса 0,828 кг
AM-OSK-OL/2R, Размер 2XL	Д x Ш x Г (45 см, 35 см, 6 см), Масса 0,889 кг
AM-OSK-OL/2R, Размер 3XL	Д x Ш x Г (45 см, 38 см, 6 см), Масса 0,947 кг
AM-OSK-OL/2R, Размер 4XL	Д x Ш x Г (45 см, 41 см, 6 см), Масса 1,012 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-OSK-ZL/2

Общее описание

Конструкция ортеза — сочетает в себе функции открытых ортезов — простоту одевания благодаря тому, что не нужно надевать ее через стопу, а также функции закрытых ортезов — полную стабилизацию надколенника и коленного сустава. Для этого в ортезе есть анатомической формы кольцо надколенника. Ортез открытый в месте подколенной ямки, что увеличивает комфорт и отвод пота. Ортез имеет 4 набора ремней и пластиковые концевки ортопедических шин. В ортезе установлены шины 2.

Показания

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)
- особенно ортез полезен при занятиях спортом.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см	мин 60 см - макс 64 см	мин 64 см - макс 68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см	мин 50 см - макс 54 см	мин 54 см - макс 58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2, Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 16 см, 4 см), Масса 0,441 кг
AM-OSK-ZL/2, Размер M	Д x Ш x Г (40 см, 17,5 см, 4 см), Масса 0,474 кг

АМ-ОСК-ZL/2, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 19 см, 4 см), Масса 0,510 кг
АМ-ОСК-ZL/2, Размер XL	Д x Ш x Г (40 см, 20,5 см, 4 см), Масса 0,546 кг
АМ-ОСК-ZL/2, Размер 2XL	Д x Ш x Г (40 см, 22 см, 4 см), Масса 0,584 кг
АМ-ОСК-ZL/2, Размер 3XL	Д x Ш x Г (40 см, 24 см, 4 см), Масса 0,623 кг
АМ-ОСК-ZL/2, Размер 4XL	Д x Ш x Г (40 см, 26 см, 4 см), Масса 0,669 кг

АМ-ОСК-ZL/2-02						
Общее описание Конструкция ортеза — сочетает в себе функции открытых ортезов — простоту одевания благодаря тому, что не нужно надевать ее через стопу, а также функции закрытых ортезов — полную стабилизацию надколенника и коленного сустава. Для этого в ортезе есть анатомической формы кольцо надколенника. Ортез удлиненный открытый в месте подколенной ямки, что увеличивает комфорт и отвод пота. Ортез имеет 4 набора ремней и пластиковые концевки ортопедических шин. В ортезе установлены шины 2. Показания - вывихов коленного сустава, - растяжений коленного сустава, - боковой нестабильности колена, - повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, - после реконструкции коленных связок, - после других операций (ортопедия) - особенно ортез полезен при занятиях спортом. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см	мин 60 см - макс 64 см	мин 64 см - макс 68 см
Обхват голени 15	Обхват голени 15	Обхват голени 15	Обхват голени 15	Обхват голени 15	Обхват голени 15	Обхват голени 15

см ниже центра коленной чашечки	см ниже центра коленной чашечки	см ниже центра коленной чашечки	см ниже центра коленной чашечки	см ниже центра коленной чашечки	см ниже центра коленной чашечки	см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см	мин 50 см - макс 54 см	мин 54 см - макс 58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2-02, Размер S	Д x Ш x Г (38 см, 19 см, 4 см), Масса 0,486 кг
AM-OSK-ZL/2-02, Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 21 см, 4 см), Масса 0,522 кг
AM-OSK-ZL/2-02, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 23 см, 4 см), Масса 0,562 кг
AM-OSK-ZL/2-02, Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 25 см, 4 см), Масса 0,601 кг
AM-OSK-ZL/2-02, Размер 2XL	Д x Ш x Г (38 см, 27 см, 4 см), Масса 0,643 кг
AM-OSK-ZL/2-02, Размер 3XL	Д x Ш x Г (38 см, 29 см, 4 см), Масса 0,688 кг
AM-OSK-ZL/2-02, Размер 4XL	Д x Ш x Г (38 см, 31 см, 4 см), Масса 0,737 кг

AM-OSK-Z/2RA

Общее описание

Ортез AM-OSK-Z / 2RA является профессиональным медицинским изделием для повышения работоспособности и походки, используемым для реабилитации повреждений коленного сустава. Изделие оснащено двумя независимыми комплектами укрепляющих ремней, выполненных из лент VELCRO и две двухосные анатомические боковые шины 2RA, которые при сгибании точно отражают движение происходящие в коленном суставе, который во время эксплуатации не изменяют своего положения относительно оси коленного сустава. Ортез чрезвычайно легкий (440 г), что повышает комфорт его ежедневного использования.

Показания

- повреждение связок (ACL, PCL, LCL, MCL)
- повреждение мениска
- растяжение коленного сустава
- вывих коленного сустава
- после перенесенных травм коленного сустава, не требующих и не квалифицированных для оперативного лечения (растяжения с повреждением коллатеральных и крестообразных



связок, при надрывах мышечных соединений) • при дегенеративных изменениях в нестабильности, вызванных травмами или заболеваниями • профилактически в спорте.						
Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 5 см), Масса 0,402 кг
AM-OSK-Z/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 26 см, 5 см), Масса 0,432 кг
AM-OSK-Z/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 29 см, 5 см), Масса 0,465 кг
AM-OSK-Z/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 32 см, 5 см), Масса 0,498 кг
AM-OSK-Z/2RA, Размер 2XL	Д x Ш x Г (36 см, 35 см, 5 см), Масса 0,532 кг
AM-OSK-Z/2RA, Размер 3XL	Д x Ш x Г (36 см, 38 см, 5 см), Масса 0,570 кг
AM-OSK-Z/2RA, Размер 4XL	Д x Ш x Г (36 см, 41 см, 5 см), Масса 0,610 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OSK-Z/2RA-02	
Общее описание Конструкция ортеза представляет собой дизайн, сочетающий в себе как открытые ортезы-легкость надевания изделия за счет отсутствия необходимости натягивать ортез через стопу, так и закрытые - полную стабилизацию коленной чашечки и коленного сустава. Для этого в изделии было установлено анатомически сформированное коленное кольцо. Кроме того, ортез имеет открытый подколенный низ, что значительно повышает комфорт использования изделия и улучшает отвод пота от конечности. Показания	

• вывих коленного сустава, • растяжения коленного сустава, • боковой нестабильности колена, • повреждения связок колена LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок колена, • после других оперативных процедур (ортопедия), • подвывих надколенника-привычный, посттравматический Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-Z/2RA-02, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 18 см, 4 см), Масса 0,354 кг
AM-OSK-Z/2RA-02, Размер M	Д x Ш x Г (34 см, 20 см, 4 см), Масса 0,380 кг
AM-OSK-Z/2RA-02, Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 22 см, 4 см), Масса 0,409 кг
AM-OSK-Z/2RA-02, Размер XL	Д x Ш x Г (34 см, 24 см, 4 см), Масса 0,439 кг
AM-OSK-Z/2RA-02, Размер 2XL	Д x Ш x Г (34 см, 26 см, 4 см), Масса 0,501 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OSK-O/2RA

Общее описание

Ортез открытого типа AM-OSK-O/2 RA – это профессиональное медицинское изделие улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Ортез оснащен двумя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO и двумя двухосными анатомическими боковыми шинами 2 RA-280, которые в течение сгибания точно отображают движение, совершающееся в коленном суставе; благодаря этому в течение работы они не меняют свое положение относительно оси коленного сустава.

Шины 2RA – это двухосные анатомические шины, которые при сгибании точно повторяют анатомическое движение коленного сустава, из-за чего в течение работы не меняют свое положение относительно оси коленного сустава.

Показания

- после перенесенных травм, не требующих иммобилизации коленного сустава (растяжений с повреждением коллатеральных связок, при надрывах мышечных прицепов)
- при хронической нестабильности коленного сустава (боковой или медиальной)
- при болевых синдромах коленного сустава после перенесенных травм и в ходе дегенеративных изменений
- после хирургического лечения коленного сустава по травматическим и болезненным причинам
- пассивная борьба с контрактурами в коленном суставе

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-O/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (38 см, 21 см, 4 см), Масса 0,387 кг
AM-OSK-O/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 23,5 см, 4 см), Масса 0,417 кг
AM-OSK-O/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 26 см, 4 см), Масса 0,448 кг
AM-OSK-O/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 28,5 см, 4 см), Масса 0,479 кг
AM-OSK-O/2RA, Размер 2XL	Д x Ш x Г (38 см, 31 см, 4 см), Масса 0,513 кг

AM-OSK-O/2RA, Размер 3XL	Д x Ш x Г (38 см, 33,5 см, 4 см), Масса 0,548 кг
AM-OSK-O/2RA, Размер 4XL	Д x Ш x Г (38 см, 36 см, 4 см), Масса 0,587 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OSK-ZJ/2RA				
Общее описание Главная особенность ортеза AM-OSK-ZJ/2RA – поддержка коленного сустава и ограничение подвижности осуществляется с помощью одной ортопедической шины и динамической ленты. Боковая шина, расположенная с внешней стороны изделия, оснащена механизмом контроля подвижности, который повторяет естественные движения сустава. Для сбалансированной поддержки эластичный ремень – лента проходит по периметру ортеза в спиральной форме. Ортез имеет анатомически профилированное отверстие надколенника, что оказывает дополнительный стабилизирующий эффект. При необходимости, жесткие элементы конструкции можно демонтировать и использовать ортез в облегченном варианте. Показания • Восстановление двигательных функций с постепенной нагрузкой на сустав. • Необходимость коррекции коленного сустава, связанной с искривлением из-за дегенерации суставных тканей. • Необходимость вертикализации и учении ходьбе. • Сложная нестабильность сустава. • Травмы коленного сустава без операционного вмешательства. • Реабилитация в послеоперационный период. • В профилактических целях. Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
мин 40 см - макс 44 см	мин 44 см - макс 48 см	мин 48 см - макс 52 см	мин 52 см - макс 56 см	мин 56 см - макс 60 см

Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 30 см - макс 34 см	мин 34 см - макс 38 см	мин 38 см - макс 42 см	мин 42 см - макс 46 см	мин 46 см - макс 50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZJ/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 6 см), Масса 0,325 кг
AM-OSK-ZJ/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 6 см), Масса 0,350 кг
AM-OSK-ZJ/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 6 см), Масса 0,376 кг
AM-OSK-ZJ/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 6 см), Масса 0,403 кг
AM-OSK-ZJ/2RA, Размер 2XL	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 6 см), Масса 0,430 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 40, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 10-20 градусов.

Регулировка угла разгибания: 10, 20, 30, 40.

Шаг регулировки: 10 градусов.

AS-SKL/F						
Общее описание Стабилизирует сбоку коленный сустав, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач. Показания - после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением боковых связок) - при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях - при дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава - профилактически — выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер	Размер	Размер

Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	2XL Обхват колена 46,5-50 см	3XL Обхват колена 50,5-55 см	4XL Обхват колена 55,5-59 см
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Габаритные размеры и масса

AS-SKL/F, Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 17 см, 4 см), Масса 0,214 кг
AS-SKL/F, Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 19 см, 4 см), Масса 0,231 кг
AS-SKL/F, Размер L	Д x Ш x Г (31 см, 21 см, 4 см), Масса 0,248 кг
AS-SKL/F, Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 23 см, 4 см), Масса 0,265 кг
AS-SKL/F, Размер 2XL	Д x Ш x Г (31 см, 25 см, 4 см), Масса 0,284 кг
AS-SKL/F, Размер 3XL	Д x Ш x Г (31 см, 27 см, 4 см), Масса 0,304 кг
AS-SKL/F, Размер 4XL	Д x Ш x Г (31 см, 29 см, 4 см), Масса 0,325 кг

AM-OSK-ZL/2RA

Общее описание

Длинный ортез закрытого типа AM-OSK-ZL/2RA – это профессиональное медицинское изделие улучшающее эффективность ходьбы, предназначенное для восстановления после повреждений коленного сустава. Ортез оснащен двумя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO и двумя двухосными анатомическими боковыми шинами 2RA, которые во время сгибания точно отображают движение, совершающееся в коленном суставе; благодаря этому шины во время работы не меняют свое положение относительно оси коленного сустава. Для точного прилегания и, соответственно, лучшей стабилизации нижней конечности, в ортезах использованы анатомически профилированные шины 2RA. Это позволяет удерживать шарниры в оси физиологического сгибания коленного сустава. Поскольку эти шины универсальны, ортез можно носить на левой или правой ноге.

Показания

- вывих коленного сустава,
- растяжение связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- растяжение связок колена LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции связок колена,
- после других операций на колене (ортопедия).



Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 56,5-60 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 60,5-64 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 64,5-68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 50,5-54 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 54,5-58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (44 см, 23,5 см, 5 см), Масса 0,603 кг
AM-OSK-ZL/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (44 см, 25,5 см, 5 см), Масса 0,648 кг
AM-OSK-ZL/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 28 см, 5 см), Масса 0,697 кг
AM-OSK-ZL/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (44 см, 30 см, 5 см), Масса 0,746 кг
AM-OSK-ZL/2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (44 см, 32,5 см, 5 см), Масса 0,797 кг
AM-OSK-ZL/2RA, Размер XXXL	Д x Ш x Г (44 см, 35 см, 5 см), Масса 0,854 кг
AM-OSK-ZL/2RA, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (44 см, 38 см, 5 см), Масса 0,914 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OSK-ZL/2RA-02

Общее описание

Конструкция ортеза сочетает в себе функции открытых ортезов — простоту одевания благодаря тому, что не нужно надевать ее через стопу, а также функции закрытых ортезов — полную стабилизацию надколенника и коленного сустава. Для этого в ортезе есть кольцо надколенника анатомической формы. Ортез открытый в месте подколенной ямки, что увеличивает комфорт и отвод пота. Ортез AM-OSK-ZL/2RA-02 имеет 4 набора ремней с пластиковыми концевками и ортопедические шины. В ортезе установлены шины 2RA Precision.

Показания

- вывих коленного сустава,
- растяжение связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- растяжение связок колена LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции связок колена,
- после других операций на колене (ортопедия).

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 56,5-60 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-ZL/2RA-02, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 22 см, 7 см), Масса 0,592 кг
AM-OSK-ZL/2RA-02, Размер M	Д x Ш x Г (45 см, 24 см, 7 см), Масса 0,637 кг
AM-OSK-ZL/2RA-02, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 26 см, 7 см), Масса 0,685 кг
AM-OSK-ZL/2RA-02, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 28 см, 7 см), Масса 0,733 кг
AM-OSK-ZL/2RA-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 30 см, 7 см), Масса 0,784 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OSK-OL/2RA

Общее описание

Боковые анатомически профилированные шины соединены шарнирным механизмом, что позволяет контролировать вращательные движения сустава. Конструкция разгружает мышцы и связки, стабилизирует сустав во фронтальной плоскости и ускоряет процесс реабилитации. Механизм сгибания максимально точно повторяет анатомические движения сустава. Регулировка подвижности осуществляется с помощью инструментов, входящих в комплектацию изделия. Для удобства и более эстетичного вида, механизм, закрыт текстильным клапаном. Конструкция изделия снабжена фиксирующими элементами – клапанами и ремнями на застежке Велкро (липучке), что позволяет подогнать объем и регулировать компрессию. Открытая область коленной чашечки обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха.



Показания

- вывих коленного сустава,
- растяжения коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждения связок колена LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции связок колена,
- после других оперативных процедур (ортопедия)

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 56,5-60 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 60,5-64 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 64,5-68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 50,5-54 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 54,5-58 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSK-OL/2RA, Размер S	Д x Ш x Г (47 см, 23 см, 5 см), Масса 0,605 кг
AM-OSK-OL/2RA, Размер M	Д x Ш x Г (47 см, 25 см, 5 см), Масса 0,651 кг
AM-OSK-OL/2RA, Размер L	Д x Ш x Г (47 см, 27 см, 5 см), Масса 0,700 кг
AM-OSK-OL/2RA, Размер XL	Д x Ш x Г (47 см, 29 см, 5 см), Масса 0,749 кг
AM-OSK-OL/2RA, Размер XXL	Д x Ш x Г (47 см, 31 см, 5 см), Масса 0,801 кг
AM-OSK-OL/2RA, Размер XXXL	Д x Ш x Г (47 см, 33 см, 5 см), Масса 0,858 кг
AM-OSK-OL/2RA, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (47 см, 35 см, 5 см), Масса 0,918 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

AM-OP-04						
Общее описание Стабилизирует сбоку коленный сустав, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному утнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач. Показания - после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением боковых связок) - при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях - при дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава - профилактически — выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОР-04, Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 8 см, 6 см), Масса 0,096 кг
АМ-ОР-04, Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 9 см, 6 см), Масса 0,107 кг
АМ-ОР-04, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 10 см, 6 см), Масса 0,119 кг
АМ-ОР-04, Размер XL	Д x Ш x Г (18 см, 11 см, 6 см), Масса 0,131 кг
АМ-ОР-04, Размер XXL	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 6 см), Масса 0,144 кг
АМ-ОР-04, Размер XXXL	Д x Ш x Г (20 см, 13 см, 6 см), Масса 0,158 кг
АМ-ОР-04, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (20 см, 14 см, 6 см), Масса 0,174 кг

АМ-ОР-05

Общее описание

Стабилизирует сбоку коленный сустав, ортез открытого типа, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному угнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач.

Показания

- после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением боковых связок)
- при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях
- при дегенеративных изменениях и/или нестабильности сустава
- профилактически — выполняет защитную функцию в контактных видах спорта.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОР-05, Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 8 см, 6 см), Масса 0,096 кг
АМ-ОР-05, Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 9 см, 6 см), Масса 0,107 кг
АМ-ОР-05, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 10 см, 6 см), Масса 0,119 кг
АМ-ОР-05, Размер XL	Д x Ш x Г (18 см, 11 см, 6 см), Масса 0,131 кг
АМ-ОР-05, Размер XXL	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 6 см), Масса 0,144 кг
АМ-ОР-05, Размер XXXL	Д x Ш x Г (20 см, 13 см, 6 см), Масса 0,158 кг
АМ-ОР-05, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (20 см, 14 см, 6 см), Масса 0,174 кг

4ARMY-SK-01				
Общее описание Ортезы группы — 4Army-это специально выделенная линия ортопедических ортезов, характеризующаяся анатомической конструкцией, значительно повышенной прочностью и отделкой в военном камуфляже типа Пантера. Ортез имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, все обводные ленты имеют двухслойную конструкцию, а гнезда ортопедических шин изготовлены из пластика повышенной прочности. Такая конструкция изделия позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. В изделии установлено стабилизирующее кольцо, обладающее дополнительными противогрибковыми качествами, а также рукоятки, облегчающие втягивание его на конечность. В изделии использовались анатомические шины 2ra Precision. Шины 2RA – это двухосные анатомические шины, которые при сгибании точно повторяют анатомическое движение коленного сустава, из-за чего вовремя работы не меняют свое положение относительно оси коленного сустава. Показания • нестабильность коленного сустава, • болезненность коленного сустава, • повреждение связок колена (ACL), • нарушения проприоцепции сустава Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-01, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 19 см, 4 см), Масса 0,522 кг
4ARMY-SK-01, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 21,5 см, 4 см), Масса 0,562 кг
4ARMY-SK-01, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 24 см, 4 см), Масса 0,604 кг
4ARMY-SK-01, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 26,5 см, 4 см), Масса 0,644 кг
4ARMY-SK-01, Размер XXL	Д x Ш x Г (37 см, 29 см, 4 см), Масса 0,692 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

4ARMY-SK-02				
Общее описание Ортез имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, все обводные ленты имеют двухслойную конструкцию, а гнезда ортопедических шин изготовлены из пластика повышенной прочности. Такая конструкция изделия позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. В изделии установлено стабилизирующее перистальтическое кольцо, обладающее дополнительными противогрибковыми качествами, а также рукоятки, облегчающие втягивание его на конечность. В изделии используются одноосные шины 1R orthodesign, работа которых заключается в том, что в механизме диаметром не более 30 мм мы использовали регулировку угла изгиба и разгибания каждые 15 градусов. Показания • нестабильность коленного сустава, • болезненность коленного сустава, • повреждение связок колена (ACL), • нарушения проприоцепции сустава Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-02, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 19,5 см, 3 см), Масса 0,515 кг
4ARMY-SK-02, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 3 см), Масса 0,554 кг

4ARMY-SK-02, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 23 см, 3 см), Масса 0,596 кг
4ARMY-SK-02, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 25 см, 3 см), Масса 0,638 кг
4ARMY-SK-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 27 см, 3 см), Масса 0,682 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

4ARMY-SK-03				
Общее описание Ортез оснащенный анатомически профилированным кольцом, обездвиживающим коленную чашечку и одноосными боковыми шинами, имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, а все обводные ленты имеют двухслойную конструкцию. В изделии используются одноосные ортопедические шины [1]. Шины [1] – это одноосные ортопедические шины, которые прежде всего используются во всех ортезах коленного сустава и верхней конечности в тех случаях, когда не требуется прочное боковое обездвижение сустава, в то время как придается значение малому массе изделия. Показания • нестабильность коленного сустава, • болезненность коленного сустава, • повреждение связок колена (ACL), • нарушения проприоцепции сустава Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-03, Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 18 см, 4 см), Масса 0,391 кг
4ARMY-SK-03, Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 20 см, 4 см), Масса 0,420 кг
4ARMY-SK-03, Размер L	Д x Ш x Г (31 см, 22 см, 4 см), Масса 0,452 кг
4ARMY-SK-03, Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 24 см, 4 см), Масса 0,484 кг
4ARMY-SK-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (31 см, 26 см, 4 см), Масса 0,517 кг

4ARMY-SK-04

Общее описание

Ортез 4army-SK-04, представляет собой анатомический коленный ортез с боковыми вставками и дополнительной стабилизацией коленной чашечки. Ортез имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, а все опоясывающие ленты имеют двухслойную конструкцию. Такая конструкция изделия позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. В изделии установлено стабилизирующее кольцо коленной чашечки, обладающее дополнительными противогрибковыми качествами, а также держатели, облегчающие вытягивание его на конечность.



Показания

- нестабильность коленного сустава,
- болезненность коленного сустава,
- повреждение связок колена (ACL),
- нарушения проприоцепции сустава

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-04, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 18 см, 3 см), Масса 0,272 кг
4ARMY-SK-04, Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 20 см, 3 см), Масса 0,293 кг
4ARMY-SK-04, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 22 см, 3 см), Масса 0,315 кг
4ARMY-SK-04, Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 24 см, 3 см), Масса 0,338 кг
4ARMY-SK-04, Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 26 см, 3 см), Масса 0,361 кг

4ARMY-SK-05

Общее описание

Ортезы группы 4Army, это специально выделенная линия ортопедических ортезов, характеризующаяся анатомической конструкцией, значительно повышенной прочностью и отделкой в военном камуфляже типа-Пантера. Ортез имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, а все опоясывающие ленты имеют двухслойную конструкцию. Такая конструкция изделия позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. В изделии установлено стабилизирующее кольцо коленной чашечки, обладающее дополнительными противогрибковыми качествами, а также держатели, облегчающие вытягивание его на конечность.

**Показания**

- нестабильность коленного сустава,
- болезненность коленного сустава,
- повреждение связок колена (ACL),
- нарушения проприоцепции сустава

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-05, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 19 см, 3 см), Масса 0,157 кг
4ARMY-SK-05, Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 3 см), Масса 0,165 кг
4ARMY-SK-05, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 23 см, 3 см), Масса 0,181 кг
4ARMY-SK-05, Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 25 см, 3 см), Масса 0,194 кг
4ARMY-SK-05, Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 27 см, 3 см), Масса 0,207 кг

4ARMY-SK-06

Общее описание

Ортез 4army-SK-06, представляет собой открытый ортез коленного сустава со стабилизацией коленной чашечки и боковыми вставками.

Ортез имеет открытый усиленный анатомический разрез, а все опоясывающие ленты имеют двухслойную конструкцию. Такая конструкция изделия позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. Дополнительные передние ленты обеспечивают точную индивидуальную настройку уровня разгрузки коленного сустава.

Показания

- боковой вывих надколенника (наиболее распространенный) (травматичный или привычный),
- легкий и умеренный болевой синдромом,
- нестабильность надколенника

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-06, Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 14,5 см, 3 см), Масса 0,122 кг
4ARMY-SK-06, Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 16 см, 3 см), Масса 0,131 кг
4ARMY-SK-06, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 18 см, 3 см), Масса 0,141 кг
4ARMY-SK-06, Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 20 см, 3 см), Масса 0,151 кг
4ARMY-SK-06, Размер XXL	Д x Ш x Г (16 см, 22 см, 3 см), Масса 0,161 кг

4ARMY-SK-07

Общее описание

Ортез 4army-SK-07, представляет собой анатомический коленный ортез с двухосными боковыми шинами и дополнительной стабилизацией коленной чашечки. В изделии установлено стабилизирующее кольцо коленной чашечки, обладающее дополнительными противогрибковыми качествами, а также держатели, облегчающие вытягивание его на конечность. В изделии используются двухосные ортопедические шины.

Показания

- нестабильность коленного сустава,
- болезненность коленного сустава,
- повреждение связок колена (ACL),
- нарушения проприоцепции сустава

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-07, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 19 см, 4 см), Масса 0,496 кг
4ARMY-SK-07, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 21,5 см, 4 см), Масса 0,533 кг
4ARMY-SK-07, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 24 см, 4 см), Масса 0,573 кг
4ARMY-SK-07, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 26,5 см, 4 см), Масса 0,613 кг
4ARMY-SK-07, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 29 см, 4 см), Масса 0,656 кг

4ARMY-SK-08**Общее описание**

Ортез 4army-SK-08-это анатомический коленный ортез с гибкими боковыми шинами и дополнительной стабилизацией коленной чашечки. Ортез имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, а все опоясывающие ленты имеют двухслойную конструкцию. В изделии установлено стабилизирующее кольцо коленной чашечки, обладающее дополнительными противогрибковыми качествами, а также держатели, облегчающие вытягивание его на конечность. Ортопедические шины обеспечивают отличную стабилизацию сустава, помогая выпрямить колено.



Показания • нестабильность коленного сустава, • болезненность коленного сустава, • повреждение связок колена (ACL), • травмы коленной чашечки, • нарушения проприоцепции сустава				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-08, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 18 см, 4 см), Масса 0,405 кг
4ARMY-SK-08, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 20 см, 4 см), Масса 0,435 кг
4ARMY-SK-08, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 4 см), Масса 0,468 кг
4ARMY-SK-08, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 24 см, 4 см), Масса 0,501 кг
4ARMY-SK-08, Размер XXL	Д x Ш x Г (37 см, 26 см, 4 см), Масса 0,536 кг

4ARMY-SK-09	
Общее описание Ортез 4Army-SK-09-это анатомический ортез колена выполнен из усиленного сырья характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что безусловно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию, обеспеченного сустава. Коленный ортез имеет анатомический крой, а его конструкция дополнительно усилена. Ортез был оснащен защитой колена, которая защищает кости и мягкие ткани от ушибов. Ортез обеспечивает сжатие, что увеличивает циркуляцию крови. Благодаря этому мышцы во время физической активности насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышенную эффективность их работы.	
Показания • профилактика в спорте (в основном контактном) • перегрузки коленного сустава, • растяжения коленного сустава, • вывих коленного сустава,	

• легкая боковая нестабильность колена				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-09, Размер S	Д x Ш x Г (29 см, 15 см, 7 см), Масса 0,166 кг
4ARMY-SK-09, Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 17 см, 7 см), Масса 0,179 кг
4ARMY-SK-09, Размер L	Д x Ш x Г (29 см, 19 см, 7 см), Масса 0,192 кг
4ARMY-SK-09, Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 21 см, 7 см), Масса 0,205 кг
4ARMY-SK-09, Размер XXL	Д x Ш x Г (29 см, 23 см, 7 см), Масса 0,220 кг

4ARMY-SK-10		
Общее описание Благодаря использованию системы подачи воздуха, основанной из внутреннего перфорированного мягкого элемента, продукт обладает более свободным отводом влаги и свойством, позволяющим коже дышать. Передняя сформированная анатомически защита, защищает коленную чашечку от механических повреждений. Стабилизирует коленный сустав, снимает напряжение мышц сохраняя стабильную температуру и упругое давление, которые оказывают обезболивающее, и уменьшающее отек действие; облегчает всасывание экссудатов и гематом. Показания • При болевом синдроме после былых травм, • при перегрузочно-воспалительных и дегенеративных изменениях. • Хорошо защищает коленный сустав, особенно в контактных видах спорта. Технические характеристики		
Размер M	Размер L	
Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Размер XL Обхват колена 42-46 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SK-10, Размер М	Д x Ш x Г (37 см, 20 см, 4 см), Масса 0,435 кг
4ARMY-SK-10, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 4 см), Масса 0,468 кг
4ARMY-SK-10, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 24 см, 4 см), Масса 0,501 кг

4ARMY-SB-01

Общее описание

Активный ортез поддерживающий связки коленного сустава. Это активный, асимметричный, двухшинный ортез коленного сустава, имеющий динамические ремни для усиления связок. Ортез оборудован анатомически профилированным кольцом для стабилизации надколенника и одноосными боковыми шинами. Благодаря использованию системы подачи воздуха, основанной из внутреннего перфорированного мягкого элемента, продукт обладает более свободным отводом влаги и свойством, позволяющим коже дышать.

Показания

- При прогрессирующих дегенеративных изменениях и / или нестабильности суставов в результате прошлых травм,
- болезнь - у лиц, которые не согласны или не имеют права на
- хирургическое лечение.
- Профилактически используется в спорте.



Технические характеристики

Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SB-01, Размер S	Д x Ш x Г (43 см, 22,5 см, 9 см), Масса 0,403 кг
4ARMY-SB-01, Размер М	Д x Ш x Г (43 см, 25 см, 9 см), Масса 0,448 кг
4ARMY-SB-01, Размер L	Д x Ш x Г (43 см, 28 см, 9 см), Масса 0,498 кг
4ARMY-SB-01, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 31 см, 9 см), Масса 0,548 кг
4ARMY-SB-01, Размер 2XL	Д x Ш x Г (45 см, 34 см, 9 см), Масса 0,603 кг
4ARMY-SB-01, Размер 3XL	Д x Ш x Г (47 см, 37 см, 9 см), Масса 0,663 кг
4ARMY-SB-01, Размер 4XL	Д x Ш x Г (47 см, 41 см, 9 см), Масса 0,729 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

4ARMY-SB-02

Общее описание

Ортез открытого типа, удлиненный - оснащен двухосными анатомическими боковыми шинами с возможностью настройки диапазона движения в суставе: (-15 °, 0 °, 75 °) и анатомической формы стабилизирующим кольцом надколенника, затяжными лентами VELCRO и задней крестовой застежкой. Благодаря использованию системы подачи воздуха, основанной из внутреннего перфорированного мягкого элемента, продукт обладает более свободным отводом влаги и свойством, позволяющим коже дышать.

Показания

- При дегенеративных изменениях и / или хронической нестабильности суставов в результате прошлых травм или;
- после травм суставов, не пригодных для операции;
- в реабилитации после операции на суставе.
- Идеально подходит для экстремальных видов спорта,
- оптимальная длина для высоких людей.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 56,5-60 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 60,5-64 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 64,5-68 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 50,5-54 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 54,5-58 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SB-02, Размер S	Д x Ш x Г (42 см, 20 см, 6 см), Масса 0,530 кг
4ARMY-SB-02, Размер M	Д x Ш x Г (42 см, 22,5 см, 6 см), Масса 0,570 кг
4ARMY-SB-02, Размер L	Д x Ш x Г (42 см, 25 см, 6 см), Масса 0,613 кг
4ARMY-SB-02, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 27,5 см, 6 см), Масса 0,674 кг
4ARMY-SB-02, Размер 2XL	Д x Ш x Г (45 см, 30 см, 6 см), Масса 0,721 кг
4ARMY-SB-02, Размер 3XL	Д x Ш x Г (48 см, 32,5 см, 6 см), Масса 0,793 кг
4ARMY-SB-02, Размер 4XL	Д x Ш x Г (48 см, 35 см, 6 см), Масса 0,849 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

4ARMY-SB-03

Общее описание

Ортез оснащенный анатомически профилированным кольцом, обездвиживающим коленную чашечку и дополнительной боковой стабилизацией. Он сделан из конструкционного материала, а лагодаря применению системы, заключающейся во внутренней перфорации мягкого элемента ортеза, изделие обеспечивает свободное дыхание кожи и отвод влаги наружу.

Показания

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- после других операций (ортопедия)
- подвывихи коленной чашечки – привычные, после травм.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SB-03, Размер S	Д x Ш x Г (42 см, 20 см, 6 см), Масса 0,530 кг
4ARMY-SB-03, Размер M	Д x Ш x Г (42 см, 22,5 см, 6 см), Масса 0,570 кг
4ARMY-SB-03, Размер L	Д x Ш x Г (42 см, 25 см, 6 см), Масса 0,613 кг
4ARMY-SB-03, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 27,5 см, 6 см), Масса 0,674 кг
4ARMY-SB-03, Размер 2XL	Д x Ш x Г (45 см, 30 см, 6 см), Масса 0,721 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

4ARMY-U-02

Общее описание

Закрытый односторонний ортез имеет регулировку угла сгибания и разгибания. Он сделан из конструкционного материала, а благодаря применению системы, заключающейся во внутренней перфорации мягкого элемента ортеза, изделие обеспечивает свободное дыхание кожи и отвод влаги наружу. Ортез оснащен двумя независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано одноосными боковыми шинами, изготовленными из пластика, армированного углеродными волокнами. Положение шин в ортезе и их особая эластичность способствует надлежащему прилеганию ортеза к охраняемой конечности и позволяет достигнуть отличной стабилизации оберегаемого сустава. Шины снабжены специальными шарнирами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания каждые 15 градусов. Такая точная регулировка изделия решительно облегчает процесс восстановления поврежденного коленного сустава.



Показания

- остеоартрит коленного сустава, вальгусная или варусная деформация ног,
- нестабильность коленного сустава по ортопедическим или неврологическим причинам,
- после травм колена не требующих или не позволяющих операции (вывихи с повреждением боковых или крестообразных связок),
- надрыв креплений мышц,
- дегенеративные изменения,
- реабилитация,
- профилактика в спорте.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см


Габаритные размеры и масса

4ARMY-U-02, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 19 см, 3 см), Масса 0,198 кг
4ARMY-U-02, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 21,5 см, 3 см), Масса 0,221 кг
4ARMY-U-02, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 24 см, 3 см), Масса 0,245 кг
4ARMY-U-02, Размер XL	Д x Ш x Г (41 см, 26,5 см, 3 см), Масса 0,270 кг
4ARMY-U-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (44 см, 29 см, 3 см), Масса 0,296 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

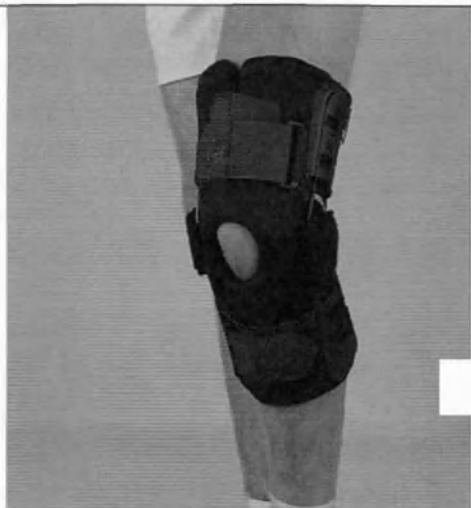4ARMY-U-03	
Общее описание Закрытый односторонний ортез имеет регулировку угла сгибания и разгибания. Ортез имеет новый анатомический крой, его конструкция дополнительно усилена, все обводные ленты имеют двухслойную структуру, а гнезда для ортопедических шин сделаны из пластика повышенной прочности. Такая конструкция изделия позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. Изделие имеет стабилизирующее периферийное кольцо с дополнительными противогрибковыми свойствами и рукоятками, облегчающими его натяжение на конечность. Показания • остеоартрит коленного сустава, вальгусная или варусная деформация ног, • нестабильность коленного сустава по ортопедическим или неврологическим причинам, • после травм колена не требующих или не позволяющих операции (вывихи с повреждением боковых или крестообразных связок), • надрыв креплений мышц, • дегенеративные изменения, • реабилитация, • профилактика в спорте.	

Технические характеристики						
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-U-03, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 19 см, 3 см), Масса 0,198 кг
4ARMY-U-03, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 21,5 см, 3 см), Масса 0,221 кг
4ARMY-U-03, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 24 см, 3 см), Масса 0,245 кг
4ARMY-U-03, Размер XL	Д x Ш x Г (41 см, 26,5 см, 3 см), Масса 0,270 кг
4ARMY-U-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (44 см, 29 см, 3 см), Масса 0,296 кг
4ARMY-U-03, Размер XXXL	Д x Ш x Г (46 см, 31,5 см, 3 см), Масса 0,326 кг
4ARMY-U-03, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (46 см, 34 см, 3 см), Масса 0,402 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

OKD-11				
Общее описание Ортез колена закрытого типа имеет специальное эластичное уплотнение стабилизирующее надколенник. Благодаря применению велкротки, его можно устанавливать в любом месте в зависимости от вида вывиха. Показания - Вывих надколенника (боковой, медиальный, вертикальный и горизонтальный) - Нарушение траектории надколенника - Пателлофemorальный конфликт (Пателлофemorальный синдром) - Нестабильность пателлофemorального сустава. Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-11, Размер S	Д x Ш x Г (39 см, 19 см, 8 см), Масса 1,860 кг
OKD-11, Размер M	Д x Ш x Г (42 см, 21,5 см, 8 см), Масса 0,956 кг
OKD-11, Размер L	Д x Ш x Г (45 см, 24 см, 8 см), Масса 1,168 кг
OKD-11, Размер XL	Д x Ш x Г (48 см, 26,5 см, 8 см), Масса 1,285 кг
OKD-11, Размер XXL	Д x Ш x Г (51 см, 29 см, 8 см), Масса 1,414 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-12				
Общее описание Ортез колена OKD-12 – ортопедическое изделие, специально созданное для поддержания надколенника во время восстановительного периода. Эластичная модель фиксирует нижнюю и верхнюю часть сустава в естественном положении, препятствует смещению и устраняет болевой синдром. Ортез выполнен в виде тугй повязки с двумя эластичными ремнями, обеспечивающими дополнительную стабилизацию во время движения. Открытая надколенная зона поддерживает сустав в анатомически правильном положении. В боковых частях изделия неопреновая уплотнения - подушечки, так же выполняют вспомогательную функцию по поддержке надколенника. Изделие универсально – применяется на обе ноги и рекомендовано не только в лечебных, но и в профилактических целях при занятии спортом и активной физической нагрузке. Показания - боковой вывих надколенника (наиболее распространенный) (травматичный или привычный), - легкий и умеренный болевой синдромом, - нестабильность надколенника Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-12, Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 14,5 см, 5 см), Масса 0,761 кг
OKD-12, Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 16 см, 5 см), Масса 0,818 кг
OKD-12, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 18 см, 5 см), Масса 0,880 кг
OKD-12, Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 20 см, 5 см), Масса 0,942 кг
OKD-12, Размер XXL	Д x Ш x Г (16 см, 22 см, 5 см), Масса 0,998 кг

OKD-15

Общее описание

Ортез колена OKD-15 очень эффективен при нестабильности коленного сустава. Активный ортез для стабилизации колена при нестабильности, воспалениях, гонартрозе. Имеет силиконовое кольцо для стабилизации надколенника. При ходьбе вкладыш взаимодействуя с ортезом массирует сустав разогревая мышцы и ускоряя заживание.

Анатомический силиконовый вкладыш поглощает сотрясения в пателлофemorальном суставе и уменьшает давление на структуры сустава, равномерно распределяя энергию в суставе. Это уменьшает боль в колене.

Боковые упругие шины стабилизируют коленный сустав в фронтальной плоскости предотвращая боковое движение колена. Эластичные ремни перекрещиваются под коленом и стабилизируют голень, а также разгружают крестообразную связку ACL и ликвидируют смещение кости при ходьбе. Натяжение ремней можно регулировать.

Показания

- дислокации колена,
- растяжения связок колена,
- легкой боковой нестабильности коленного сустава,
- легкой нестабильности надколенника
- воспаления коленного сустава
- гонартроз
- профилактика в спорте.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см



Габаритные размеры и масса

OKD-15, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 18 см, 3 см), Масса 0,279 кг
-------------------------	--

OKD-15, Размер М	Д x Ш x Г (32 см, 20 см, 3 см), Масса 0,300 кг
OKD-15, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 3 см), Масса 0,323 кг
OKD-15, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 24 см, 3 см), Масса 0,346 кг
OKD-15, Размер 2XL	Д x Ш x Г (32 см, 26 см, 3 см), Масса 0,370 кг

АТОМ ACL				
Общее описание Ортез колена создает сопротивление силам, воздействующим на варусное или вальгусное колено, а также нивелирует негативный эффект переднего трансляции (смещения) большеберцовой кости. Ортез также позволяет контролировать вальгусную и варусную деформацию. Ортез обеспечивает максимум контроля и защиты колена. Показания - Легкая или тяжелая нестабильность связок ACL, PCL MCL и LCL - Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL - Смешанные травмы ACL / PCL - Гиперэкстензия колена - АТОМ/ ACL является хорошим средством при вальгусной и варусной деформации Технические характеристики				
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56-60 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 46-50 см

Габаритные размеры и масса

АТОМ ACL, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 16 см, 12,5 см), Масса 0,561 кг
АТОМ ACL, Размер М	Д x Ш x Г (36 см, 17,5 см, 12,5 см), Масса 0,624 кг
АТОМ ACL, Размер L	Д x Ш x Г (39 см, 19 см, 12,5 см), Масса 0,693 кг

АТОМ ACL, Размер XL	Д x Ш x Г (42 см, 20,5 см, 12,5 см), Масса 0,753 кг
АТОМ ACL, Размер XXL	Д x Ш x Г (45 см, 22 см, 12,5 см), Масса 0,829 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

RAPTOR BIONIC			
Общее описание Это четырехточечный ортез, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава, покрытого горячим порошковым покрытием. В ходе реабилитации 4-точечная стабилизация позволяет проводить более "агрессивное лечение", защищая связку вместе с ослабленным местом ее имплантации. Свойства, снижающие напряжение ACL наших ортезов с технологией 4Р, имеют важное значение в процессе реабилитации и в течение всего периода ремоделирования, то есть естественного ремоделирования трансплантата ACL. Показания 1. Умеренная или тяжелая нестабильность ACL, PCL, MCL и LCL, 2. Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL, 3. Комбинированные травмы ACL/PCL, 4. Повреждение мениска 5. Гиперплазия коленного сустава. Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см

Габаритные размеры и масса

RAPTOR BIONIC, Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 16 см, 14 см), Масса 0,531 кг
RAPTOR BIONIC, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 17,5 см, 14 см), Масса 0,584 кг

RAPTOR BIONIC, Размер L	Д x Ш x Г (39 см, 19 см, 14 см), Масса 0,640 кг
RAPTOR BIONIC, Размер XL	Д x Ш x Г (42 см, 20,5 см, 14 см), Масса 0,718 кг

OKD-23

Общее описание

OKD-23 - это активный, асимметричный, двухшинный ортез коленного сустава, имеющий динамические ремни для усиления связок.

Застежка ортеза имеет подкладку из материала с ограниченным скольжением, что помогает накладывать ортез пациентам с ограниченной функциональностью рук. Ортез имеет передние и задние обводящие ремни, помогающие лучше закрепить ортез на конечности. На плечах шин установлены асимметричные разгружающие подушки. Их применение дает равномерное распределение сил, воздействующих на конечность, на большей поверхности, благодаря чему ношение ортеза более комфортно, а шины лучше закреплены. В зависимости от потребностей, ортез колена можно оборудовать соответствующими ортопедическими шинами.

Предлагаем такие шины: Шины 2, Шины 3, Шины 1R orthodesign, Шины 2RA Precision. Ортопедические шины изготовлены из высококачественного сплава алюминия с порошковым покрытием для защиты от пота.

Активные ремни усиливающие связки можно установить 4 разными способами.

Показания

- травмы связок колена: ACL, MCL, LCL, PCL
- остеоартрит (ОА)
- вывих коленного сустава,
- растяжение связок коленного сустава,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- реконструкция коленных связок,
- после других операций (ортопедия),
- профилактически во время занятий спортом.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см	Обхват колена 50,5-55 см	Обхват колена 55,5-59 см

Габаритные размеры и масса

OKD-23, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 21 см, 4 см), Масса 0,501 кг
-------------------------	--

OKD-23, Размер М	Д х Ш х Г (37 см, 23,5 см, 4 см), Масса 0,539 кг
OKD-23, Размер L	Д х Ш х Г (37 см, 26 см, 4 см), Масса 0,579 кг
OKD-23, Размер XL	Д х Ш х Г (37 см, 28,5 см, 4 см), Масса 0,620 кг
OKD-23, Размер 2XL	Д х Ш х Г (37 см, 31 см, 4 см), Масса 0,663 кг
OKD-23, Размер 3XL	Д х Ш х Г (37 см, 33,5 см, 4 см), Масса 0,709 кг
OKD-23, Размер 4XL	Д х Ш х Г (37 см, 36 см, 4 см), Масса 0,759 кг

С шиной 1R:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

С шиной 2RA:

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

OKD-24				
Общее описание Активный ортез поддерживающий связки коленного сустава. Это активный, асимметричный, двухшинный ортез коленного сустава, имеющий динамические ремни для усиления связок.				
Показания • травмы связок колена: ACL, MCL, LCL, PCL • остеоартрит (ОА) • вывих коленного сустава, • растяжение связок коленного сустава, • боковая нестабильность коленного сустава, • реконструкция коленных связок, • после других операций (ортопедия), • профилактически во время занятий спортом.				
Технические характеристики				
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-24, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 21 см, 4 см), Масса 0,501 кг
OKD-24, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 23,5 см, 4 см), Масса 0,539 кг
OKD-24, Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 26 см, 4 см), Масса 0,579 кг
OKD-24, Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 28,5 см, 4 см), Масса 0,620 кг
OKD-24, Размер 2XL	Д x Ш x Г (37 см, 31 см, 4 см), Масса 0,663 кг

OKD-27

Общее описание

Ортез на нижние конечности, характеризующийся высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. В ортезе применили стабилизирующее кольцо на коленную чашечку, которое ее дополнительно стабилизирует во время использования. Благодаря пряжкам из полиамида и системе застежек можно плавно устанавливать силу воздействия ортеза на коленный сустав. Кольцо на коленную чашечку позиционирует ее в своей оси предохраняя от патологического смещения надколенника.

Показания

- при дегенеративных изменениях колена и коленной чашечки (хондромалиция коленной чашечки)
- при разрыве связок и мышц в области коленного сустава
- при вывихах и смещениях коленной чашечки
- при болезненных состояниях коленного сустава после перенесенных травм
- при омертвлении бугристости большеберцовой кости
- после переломов коленной чашечки, леченных путем хирургического вмешательства
- при умеренной продолжительной нестабильности сустава
- профилактически в спорте — выполняет защитную функцию при контактных видах спорта.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см



Габаритные размеры и масса

OKD-27, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 15 см, 1,5 см), Масса 0,113 кг
------------------	--

OKD-27, Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 17 см, 1,5 см), Масса 0,121 кг
OKD-27, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 19 см, 1,5 см), Масса 0,135 кг
OKD-27, Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 21 см, 1,5 см), Масса 0,144 кг
OKD-27, Размер 2XL	Д x Ш x Г (38 см, 23 см, 1,5 см), Масса 0,155 кг

OKD-28	
Общее описание Ортез коленной чашечки оснащен разгружающей подчашечной пелотой анатомической формы и стабилизирующим ремнем. Ортез снимает напряжение четырехглавой мышцы бедра, тем самым нивелируя его повышенное напряжение. Благодаря этому он стабилизирует и разгружает коленную чашечку, предотвращая боль в коленно-бедренном суставе и ее дегенерацию. К ортезу крепится силиконовая Пелота анатомической формы, которая отлично покрывает связку коленной чашечки, а ее полужесткая конструкция обеспечивает правильное снятие напряжения. Используемая анатомическая форма пелоты также предотвращает соскальзывание ортеза во время физических упражнений. Кроме того, была установлена обводная лента, завершенная пластиковой пряжкой, позволяющая прочно и прочно закрепить изделие на конечности. Показания - при надрывах мышечных креплений в области коленного сустава - при предрасположенности к вывихам - при стерильном некрозе бугристости большеберцовой кости - при дегенеративных изменениях сустава (хондромалиция коленной чашечки) - после лечения консервативным и хирургическим методами переломов. Технические характеристики Размер универсальный, Обхват под коленом - мин 26 см — макс 42 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-28, Размер универсальный	Д x Ш x Г (3,8 см, 19 см, 1,5 см), Масса 0,053 кг
-------------------------------------	---

OKD-29

Общее описание

Ортез стабилизирует коленный сустав, разгружает прикрепления мышц; позволяет установить диапазон движений сустава (0,15,75 градусов). Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он имеет болеутоляющее действие, уменьшающее отеки; способствует рассасыванию выпотов и гематом вследствие перенесенных травм. Ортез особенно рекомендуется активным и занимающимся спортом людям. Указания по применению и правила использования ортеза определяет лечащий врач.

Показания

- вывих коленного сустава,
- растяжение связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- растяжение связок колена LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции связок колена,
- после других операций на колене (ортопедия),
- подвывих надколенника (привычный, травма).

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 56,5-60 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

OKD-29, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 15 см, 14 см), Масса 0,554 кг
OKD-29, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 16,5 см, 14 см), Масса 0,595 кг
OKD-29, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 18 см, 14 см), Масса 0,64 кг
OKD-29, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 19,5 см, 14 см), Масса 0,685 кг
OKD-29, Размер XXL	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 14 см), Масса 0,733 кг

RAPTOR/2

Общее описание

Ортез был изготовлен из прочной передней и задней рамы из легкого алюминия 6061 Т6, применяемого в авиации. Кроме того, для лучшей защиты ортеза от влаги, рама была покрыта горячим порошковым покрытием, что делает ортез инертным к воздействию воды и пота пациента. В ортезе установлены пять стабилизирующих ремней, оснащенных силиконовыми антискользящими подушками, которые обеспечивают дополнительную поддержку и предотвращают скольжение ортеза на конечности. Внутренняя мягкая обивка рамы изготовлена из пены, обладающей водонепроницаемыми и разгружающими свойствами. Ортез колена RAPTOR/2 стабилизирует сустав в сагиттальной и передней плоскостях, имеет 4-точечную систему поддержки, которая отлично стабилизирует и разгружает коленный сустав. Конструкция переднезаднего ортеза позволяет закрепить голень и расположить ее на оси коленного сустава.

Показания

- Нестабильность PCL
- Повреждение / разрыв PCL
- Повреждение / разрыв ACL
- Нестабильность MCL / LCL / ACL

Технические характеристики

Общая длина ортеза: S-XL: 39 см.



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 44,5-48 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 48,5-52 см	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки 52,5-56 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 34,5-38 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 38,5-42 см	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки 42,5-46 см

Габаритные размеры и масса

RAPTOR/2, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 16 см, 15 см), Масса 0,470 кг
RAPTOR/2, Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 18 см, 15 см), Масса 0,522 кг
RAPTOR/2, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 20 см, 15 см), Масса 0,580 кг

RAPTOR/2, Размер XL	Д x Ш x Г (42 см, 22 см, 15 см), Масса 0,638 кг
----------------------------	---

AM-OSS-21			
Общее описание Ортез на коленный сустав AM-OSS-21 Функциональный ортез коленного сустава является отличным вариантом в случае повреждения PCL и предотвращения этой травмы. Имеет мышечковые подушечки, повышающие комфорт использования. Ортез изготовлен из чрезвычайно прочного переднезаднего каркаса из авиационного алюминия. Кроме того, чтобы лучше защитить ортез от влаги, каркас был покрыт прочным порошковым покрытием в горячем состоянии, в результате чего ортез становится инертным по отношению к воде и поту пациента. Показания - Легкая или тяжелая нестабильность связок ACL, PCL MCL и LCL - Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL - Смешанные травмы ACL / PCL - Гиперэкстензия колена - АТОМ/1R является хорошим средством при вальгусной и варусной деформации. Технические характеристики			
Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см Длина шины 35-37 см	Размер M окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см Длина шины 37-40 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см Длина шины 40-43 см	Размер XL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см Длина шины 40-44 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-21, Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 15 см, 2 см), Масса 0,624 кг
AM-OSS-21, Размер M	Д x Ш x Г (40 см, 17 см, 2 см), Масса 0,693 кг
AM-OSS-21, Размер L	Д x Ш x Г (43 см, 19 см, 2 см), Масса 0,770 кг
AM-OSS-21, Размер XL	Д x Ш x Г (44 см, 21 см, 2 см), Масса 0,847 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.
 Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.
 Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-OSS-24				
Общее описание Ортез очень удобный, комфортный, предотвращает боковой (самый частый) вывих надколенника. Боковые уплотнения гарантируют эффективность. Мягкая боковая подушка и два эластичных ремня над и под коленом стабилизируют и позиционируют надколенник правильно в оси сустава. Во время сгибания и разгибания колена ремни натягиваются и вместе с боковой подушечкой поддерживают правильное положение надколенника. Показания - боковой вывих надколенника (наиболее распространенный) (травматичный или привычный), - легкий и умеренный болевой синдромом, - нестабильность надколенника. Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-24, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 10 см, 2 см), Масса 0,117 кг
AM-OSS-24, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,130 кг
AM-OSS-24, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 13 см, 2 см), Масса 0,144 кг
AM-OSS-24, Размер XL	Д x Ш x Г (43 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,158 кг
AM-OSS-24, Размер 2XL	Д x Ш x Г (46 см, 16 см, 2 см), Масса 0,174 кг

AM-OSS-26	
Общее описание Ортез закрытого типа, характеризуется превосходной стабилизацией коленного сустава в лобной и сагиттальной плоскости, при этом гарантирует контроль ротационных движений. Позволяет заниматься активными видами спорта и туризма даже в старшем возрасте при дисфункциях и дегенеративных изменениях	

в коленном суставе.

Показания

- травмы менисков
- вывихов коленного сустава,
- растяжения связок колена,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- травмы связок колена LCL, MCL и ACL,
- после артроскопии коленного сустава
- профилактика в спорте.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-26, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 10 см, 2 см), Масса 0,117 кг
АМ-OSS-26, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,130 кг
АМ-OSS-26, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 13 см, 2 см), Масса 0,144 кг
АМ-OSS-26, Размер XL	Д x Ш x Г (43 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,158 кг
АМ-OSS-26, Размер XXL	Д x Ш x Г (46 см, 16 см, 2 см), Масса 0,174 кг
АМ-OSS-26, Размер XXXL	Д x Ш x Г (48 см, 17,5 см, 2 см), Масса 0,192 кг
АМ-OSS-26, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (51 см, 19 см, 2 см), Масса 0,211 кг

АМ-OSS-27

Общее описание

Ортез открытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью. Ортез оснащен независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано боковыми шинами 2 изготовленными из высококачественного сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой.

Показания


- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,



- боковой нестабильности колена, - повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, - после реконструкции коленных связок, - после других операций (ортопедия).				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса


АМ-OSS-27, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 10 см, 2 см), Масса 0,117 кг
АМ-OSS-27, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,130 кг
АМ-OSS-27, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 13 см, 2 см), Масса 0,144 кг
АМ-OSS-27, Размер XL	Д x Ш x Г (43 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,158 кг
АМ-OSS-27, Размер 2XL	Д x Ш x Г (46 см, 16 см, 2 см), Масса 0,174 кг

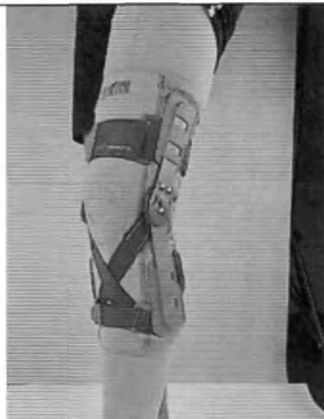AM-OSS-28				
Общее описание Ортез открытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью. Ортез оснащен независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано боковыми шинами 1R изготовленными из высококачественного сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой.				
Показания - вывихов коленного сустава, - растяжений коленного сустава, - боковой нестабильности колена, - повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, - после реконструкции коленных связок, - после других операций (ортопедия).				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

АМ-OSS-28, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 10 см, 2 см), Масса 0,117 кг
---------------------	--

AM-OSS-28, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,130 кг
AM-OSS-28, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 13 см, 2 см), Масса 0,144 кг
AM-OSS-28, Размер XL	Д x Ш x Г (43 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,158 кг
AM-OSS-28, Размер 2XL	Д x Ш x Г (46 см, 16 см, 2 см), Масса 0,174 кг

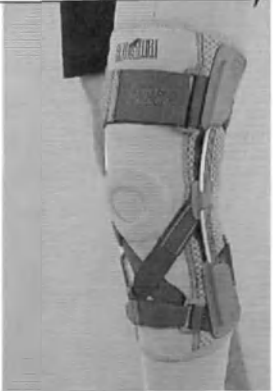AM-OSS-29				
Общее описание Орtez открытого типа, изготовлен из перфорированной неопреновой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью. Орtez оснащен независимыми наборами укрепляющих поясов, выполненных из лент VELCRO. Изделие оборудовано эластичными боковыми шинами, изготовленными из высококачественного металлопластика. Благодаря своей конструкции шины гарантируют превосходную боковую стабильность сустава, имеют плавное анатомическое сгибание, так что орtez не сдвигается на конечности. Показания - вывихов коленного сустава, - растяжений коленного сустава, - боковой нестабильности колена, - повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL, - после реконструкции коленных связок, - после других операций (ортопедия). Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см	Обхват колена 46,5-50 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-29, Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 10 см, 2 см), Масса 0,117 кг
AM-OSS-29, Размер M	Д x Ш x Г (37 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,130 кг
AM-OSS-29, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 13 см, 2 см), Масса 0,144 кг
AM-OSS-29, Размер XL	Д x Ш x Г (43 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,158 кг
AM-OSS-29, Размер 2XL	Д x Ш x Г (46 см, 16 см, 2 см), Масса 0,174 кг

Общее описание


Обездвиживающий нижнюю конечность тугор изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью со свойствами липучки.

Тугор оснащен:

- Открытым мягким рукавом, позволяющим приспособить изделие к разным окружностям нижней конечности.
- Системой лент VELCRO, обеспечивающих надлежащее прилегание изделия к телу и более эффективную фиксацию охраняемой конечности.
- Системой анатомически профилированных алюминиевых шин с комплектом независимого крепления к рукаву тугора.

Показания

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- переднемедиальной нестабильности колена
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок, в ранний период после других операций коленного сустава,
- ранней вертикализации больного.

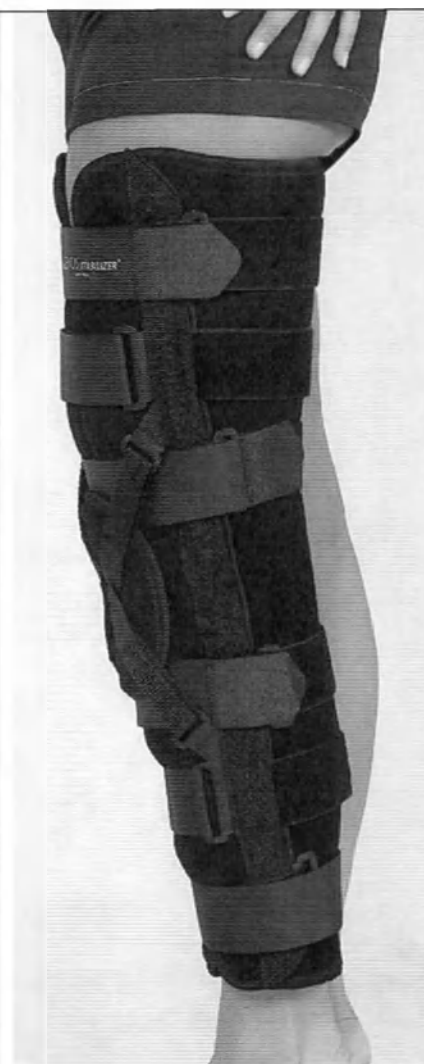Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56-60 см
окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 46-50 см
Длина изделия 40 см	Длина изделия 50 см	Длина изделия 60 см	Длина изделия 70 см	Длина изделия 70 см

Габаритные размеры и масса

AS-U-03, Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 22 см, 3 см), Масса 0,980 кг
AS-U-03, Размер M	Д x Ш x Г (50 см, 24 см, 3 см), Масса 1,089 кг

AS-U-03, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 26 см, 3 см), Масса 1,210 кг
AS-U-03, Размер XL	Д x Ш x Г (70 см, 28 см, 3 см), Масса 1,331 кг
AS-U-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (70 см, 30 см, 3 см), Масса 1,397 кг

AS-U-04

Общее описание

Обездвиживающий нижнюю конечность ортез изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной тканью со свойствами липучки. Титор оснащен:

- Открытым мягким рукавом, позволяющим приспособить изделие к разным окружностям нижней конечности.
- Системой лент VELCRO, обеспечивающих надлежащее прилегание изделия к телу и более эффективную фиксацию охраняемой конечности.
- Системой анатомически профилированных алюминиевых шин с комплектом независимого крепления к рукаву титора.

Показания

- вывихов коленного сустава,
- растяжений коленного сустава,
- боковой нестабильности колена,
- повреждений коленных связок LCL, MCL и ACL,
- после реконструкции коленных связок,
- в ранний период после других операций коленного сустава,
- после других операций (ортопедия)

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 56-60 см
окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 46-50 см
Длина изделия 40 см	Длина изделия 50 см	Длина изделия 60 см	Длина изделия 70 см	Длина изделия 70 см

Габаритные размеры и масса

AS-U-04, Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 15 см, 3 см), Масса 0,923 кг
AS-U-04, Размер M	Д x Ш x Г (50 см, 16,5 см, 3 см), Масса 1,026 кг
AS-U-04, Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 18 см, 3 см), Масса 1,140 кг
AS-U-04, Размер XL	Д x Ш x Г (70 см, 19,5 см, 3 см), Масса 1,254 кг
AS-U-04, Размер XXL	Д x Ш x Г (70 см, 21 см, 3 см), Масса 1,315 кг

AS-U-05

Общее описание

Ортез колена изготовлен из перфорированной пенки с подкладкой. Он имеет 2 независимых системы ремней на липучках и 2 боковые шины из углеродного волокна с шарнирами, регулирующими подвижность сустава с шагом 15°. Положение и форма шин способствуют лучшему прилеганию ортеза к ноге и стабилизации сустава. Внутренняя перфорация вентилирует кожу и предотвращает перегрев и опрелости. Анатомическое кольцо на коленную чашечку из пенки, имеющей противогрибковые свойства создает максимум стабилизации пателлофemorального сустава.



Показания

- вывих коленного сустава,
- растяжение связок коленного сустава,
- боковая нестабильность коленного сустава,
- травмы связок LCL, MCL и ACL,
- реконструкция связок коленного сустава,
- после операций на колене (ортопедия).

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Размер XXXXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см	Обхват колена 50-55 см	Обхват колена 55-59 см

Габаритные размеры и масса

AS-U-05, Размер S	Д x Ш x Г (18,5 см, 22 см, 3 см), Масса 0,170 кг
AS-U-05, Размер M	Д x Ш x Г (20,5 см, 24 см, 3 см), Масса 0,189 кг
AS-U-05, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 26 см, 3 см), Масса 0,210 кг

AS-U-05, Размер XL	Д x Ш x Г (25,5 см, 28 см, 3 см), Масса 0,231 кг
AS-U-05, Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 30 см, 3 см), Масса 0,254 кг
AS-U-05, Размер XXXL	Д x Ш x Г (30,5 см, 32 см, 3 см), Масса 0,280 кг
AS-U-05, Размер XXXXL	Д x Ш x Г (33,5 см, 34 см, 3 см), Масса 0,307 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.


Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

RW-ProFit				
Общее описание Компрессионный ортез колена RW-ProFit поддерживает оптимальную температуру сустава, что положительно влияет на уменьшение ревматических болевых ощущений. Кроме того, ортез обеспечивает постоянную компрессию и улучшает проприоцепцию сустава после травм или при неврологических расстройствах. Систематическое использование ортеза во время физической активности защищает от травмирования и уменьшает болевые ощущения. Ортез обеспечивает гибкость, но одновременно особенно устойчив к растягиванию. Благодаря этому, он не теряет анатомичной формы после многократного пользования и обеспечивает эффективную компрессию даже при длительном его использовании. Показания • профилактики в спорте (контактные виды) • при перегрузках коленного сустава, • вывихи коленного сустава, • растяжения связок коленного сустава, • легкая боковая нестабильность колена. Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см	
окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см	

Габаритные размеры и масса

RW-ProFit, Размер S	Д x Ш x Г (17 см, 15 см, 2 см), Масса 0,125 кг
RW-ProFit, Размер M	Д x Ш x Г (19 см, 16,5 см, 2 см), Масса 0,136 кг
RW-ProFit, Размер L	Д x Ш x Г (19 см, 18 см, 2 см), Масса 0,146 кг
RW-ProFit, Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 19,5 см, 2 см), Масса 0,171 кг

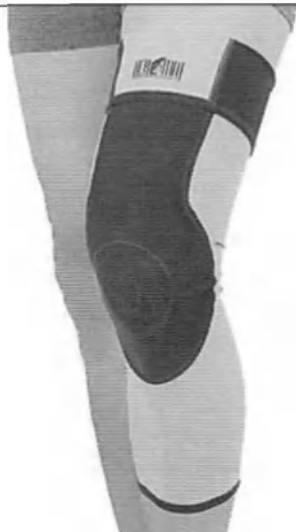RW-Sport			
Общее описание Компрессионный ортез колена RW-Sport поддерживает оптимальную температуру сустава, что положительно влияет на уменьшение ревматических болевых ощущений. Ортез обеспечивает гибкость, но одновременно устойчив к растягиванию. Благодаря этому, он не теряет анатомичной формы после многократного пользования и обеспечивает эффективную компрессию даже при длительном его использовании. Систематическое использование ортеза во время физической активности защищает от травмирования и уменьшает болевые ощущения. Показания • профилактики в спорте (контактные виды) • при перегрузках коленного сустава, • вывихи коленного сустава, • растяжения связок коленного сустава, • легкая боковая нестабильность колена. Технические характеристики			
Размер S окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	Размер M окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	Размер L окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	Размер XL окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см

Габаритные размеры и масса

RW-Sport, Размер S	Д x Ш x Г (18 см, 16 см, 2 см), Масса 0,103 кг
RW-Sport, Размер M	Д x Ш x Г (20 см, 17,5 см, 2 см), Масса 0,112 кг
RW-Sport, Размер L	Д x Ш x Г (20 см, 19 см, 2 см), Масса 0,120 кг
RW-Sport, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 20,5 см, 2 см), Масса 0,140 кг

RW-PowerFit

Общее описание

Использование защитного рукава под скелетный ортез гарантирует улучшение комфорта при его использовании и предохраняет от возможных ссадин эпидермиса. Кроме того, защитный рукав всей своей поверхностью воздействует компрессионно на сустав колена, что улучшает его устойчивость и снимает местный нажим, возникающий в местах полос по периметру.

Анатомическая конструкция изделия и вырез на коленной чашечке гарантируют высокий комфорт использования рукава и его высокую эффективность.

Рукав подходит как для правой, так и для левой ноги.



Показания

- Эластичный защитный рукав с надколенником предназначен для использования под любые скелетные ортезы коленного сустава.
- Рукав дополнительно защищает ортез от соскальзывания, а также снижает риск ссадин эпидермиса, возникающих в результате использования ортеза.

Технические характеристики

Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 37-40 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см
окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 27-30 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см

Габаритные размеры и масса

RW-PowerFit, Размер XS	Д x Ш x Г (22 см, 18 см, 2 см), Масса 0,100 кг
RW-PowerFit, Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 19,5 см, 2 см), Масса 0,109 кг
RW-PowerFit, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 21 см, 2 см), Масса 0,117 кг
RW-PowerFit, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 23 см, 2 см), Масса 0,126 кг

RW-01

Общее описание

Шино-повязочный ортез нижней конечности изготовлен из:

- Двух открытых рукавов – бедра и голени – способствующих легкому их наложению и точному прилеганию соответственно размерам окружностей нижней конечности.

- Ортопедических шин с системой их фиксации.

- Набора лент VELCRO.

Изделие оснащено двумя двухосными боковыми шинами с зубчатым механизмом и регулировкой угла сгибания и разгибания; они изготовлены из высококачественного сплава алюминия, покрытого методом горячего напыления прочной оболочкой.


Показания

- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после обширных операций коленного сустава вследствие травм (внутрисуставные переломы, реконструкция крестообразных связок) и болезней (частичные или полные аллопластики)

- в качестве иммобилизатора и в период реабилитации после перенесенных травм коленного сустава, которые не требуют оперативного лечения или не классифицируются к нему

- в период вертикализации и учения ходьбе у больных неврологического и ортопедического отделов

- для профилактики и лечения контрактур коленного сустава вызванных парезом или болезненными изменениями.

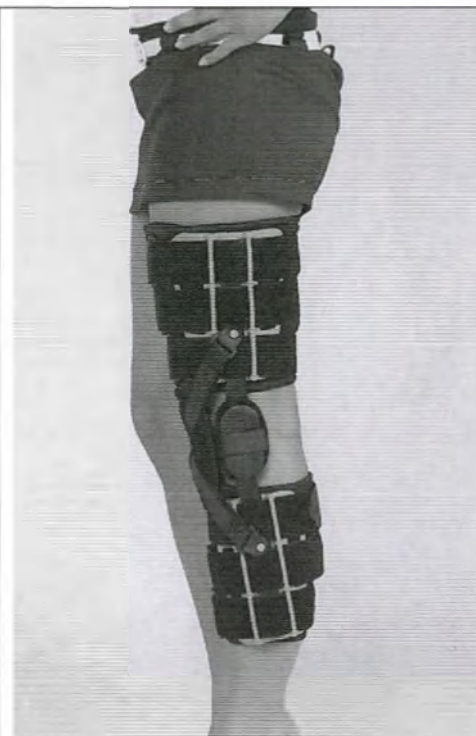Технические характеристики**Размер S**

Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки
мин 44 см — макс 52 см

Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 34 см — макс 42 см

Расстояние от колена до

Размер M

Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки
мин 52 см — макс 60 см

Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 42 см — макс 50 см

Расстояние от колена до

Размер L

Диапазон окружности бедра в 15 см выше центра коленной чашечки
мин 52 см — макс 60 см

Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 42 см — макс 50 см

Расстояние от колена до

паха 21,5 см	паха 25,5 см	паха 28,5 см
------------------------	------------------------	------------------------

Габаритные размеры и масса

RW-01, Размер S	Д x Ш x Г (17 см, 15 см, 2 см), Масса 0,125 кг
RW-01, Размер M	Д x Ш x Г (18 см, 16,5 см, 2 см), Масса 0,136 кг
RW-01, Размер L	Д x Ш x Г (19 см, 18 см, 2 см), Масса 0,146 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

RW-03				
Общее описание Стабилизирует сустав и коленную чашечку, разгружает мышцы и связки. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичному утгнетению он смягчает болевые симптомы, уменьшает опухоли, облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после травм. Делает возможным более быстрое возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач. Ортез колена закрытого типа является профессиональным медицинским изделием, исправляющим походку и служащим для реабилитации коленного сустава. Показания - после перенесенных травм колена не требующих жесткой фиксации сустава (вывихи и разрывы с повреждением связок) - при нестабильности сустава (боковой или центральной) - при болях коленного сустава на фоне перенесенных травм, воспалительных состояний и дегенеративных изменениях - после перенесенных операций при долечивании коленного сустава - профилактически в спорте — выполняет защитную функцию. Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34-38 см	Обхват колена 38-42 см	Обхват колена 42-46 см	Обхват колена 46-50 см

Габаритные размеры и масса

RW-03, Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 19,5 см, 2 см), Масса 0,109 кг
RW-03, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 21 см, 2 см), Масса 0,117 кг
RW-03, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 23 см, 2 см), Масса 0,126 кг
RW-03, Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 25 см, 2 см), Масса 0,147 кг
RW-03, Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 27 см, 2 см), Масса 0,157 кг

FIX-KD-01

Общее описание

Ортез FIX-KD-01 обеспечивает компрессию, фиксирование и защиту коленного сустава. Ортез отлично подойдет при легком растяжении колена, а также улучшит работу проприоцептивной сенсорной системы. Детский ортез колена FIX-KD-01 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Закрытая конструкция изделия гарантирует полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей. Ортез колена оснащен специальными держателями, помогающими надевать ортез.



Показания

- растяжение коленного сустава;
- нестабильность колена;
- легкие повреждения связок ACL, LCL, MCL;
- перенапряжение сухожилия надколенника;
- расстройства проприоцепции.

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-01, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 9,5 см, 1 см), Масса 0,052 кг
FIX-KD-01, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 11 см, 1 см), Масса 0,058 кг
FIX-KD-01, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 12 см, 1 см), Масса 0,065 кг
FIX-KD-01, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 13,5 см, 1 см), Масса 0,072 кг
FIX-KD-01, Размер 5	Д x Ш x Г (23 см, 14,5 см, 1 см), Масса 0,077 кг
FIX-KD-01, Размер 6	Д x Ш x Г (27 см, 16 см, 1 см), Масса 0,086 кг
FIX-KD-01, Размер 7	Д x Ш x Г (27 см, 17 см, 1 см), Масса 0,092 кг

FIX-KD-02

Общее описание

Ортез FIX-KD-02 обеспечивает компрессию, фиксирование и защиту коленного сустава. Ортез оснащен боковыми гибкими вставками, поэтому отлично подойдет при растяжении колена, а также улучшит работу проприоцептивной сенсорной системы. Детский ортез колена FIX-KD-02 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Закрытая конструкция изделия гарантирует полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие. Кроме того, по бокам ортеза используются гибкие вставки, дополнительно фиксирующие коленный сустав. Обеспечивая постоянное сжатие, ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей. Ортез колена оснащен сверху специальными держателями, помогающими надевать ортез.

Показания

- растяжение коленного сустава;
- нестабильность колена;
- легкие повреждения связок ACL, LCL, MCL;
- перенапряжение сухожилия надколенника;
- расстройства проприоцепции.

Технические характеристики

Общая длина ортеза:

- 1: 18 см
- 2: 19 см
- 3: 21 см
- 4: 23 см
- 5: 23 см
- 6: 24 см
- 7: 24 см



Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-02, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 8,5 см, 2 см), Масса 0,055 кг
FIX-KD-02, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 9,5 см, 2 см), Масса 0,060 кг
FIX-KD-02, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 11 см, 2 см), Масса 0,066 кг
FIX-KD-02, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 12 см, 2 см), Масса 0,073 кг
FIX-KD-02, Размер 5	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 2 см), Масса 0,078 кг
FIX-KD-02, Размер 6	Д x Ш x Г (24 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,085 кг
FIX-KD-02, Размер 7	Д x Ш x Г (24 см, 16 см, 2 см), Масса 0,091 кг

FIX-KD-03

Общее описание

Ортез FIX-KD-03 обеспечивает компрессию, фиксирование и защиту коленного сустава. Ортез оснащен передней защитой колена, поэтому отлично подойдет не только при травмах сустава, но и в качестве наколенника во время обучения по перемещению для младенцев (ползание, ползание на четвереньках, ранняя стадия ходьбы). Детский ортез колена FIX-KD-03 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Закрытая конструкция изделия гарантирует полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие. В передней части ортеза используется защита для колена, которая отлично подойдет для ползающих младенцев, чьи коленки подвержены ушибам, а также для старших детей, занимающихся спортом. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей. Ортез колена FIX-KD-03 оснащен сверху специальными держателями, помогающими надевать ортез.

Показания



• стадия обучения ходьбе; • растяжение коленного сустава; • нестабильность колена; • легкие повреждения связок ACL, LCL, MCL; • расстройства проприоцепции. Технические характеристики Общая длина изделия: 1: 18 см 2: 19 см 3: 21 см 4: 23 см 5: 23 см 6: 24 см 7: 24 см Универсальное изделие на оба колена.						
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-03, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 9,5 см, 2 см), Масса 0,052 кг
FIX-KD-03, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 10,5 см, 2 см), Масса 0,060 кг
FIX-KD-03, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 12 см, 2 см), Масса 0,064 кг
FIX-KD-03, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 2 см), Масса 0,071 кг
FIX-KD-03, Размер 5	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 2 см), Масса 0,078 кг
FIX-KD-03, Размер 6	Д x Ш x Г (25 см, 15,5 см, 2 см), Масса 0,089 кг
FIX-KD-03, Размер 7	Д x Ш x Г (25 см, 17 см, 2 см), Масса 0,095 кг

FIX-KD-04	
Общее описание	
Ортез колена FIX-KD-04 снимает тяжесть надколенника и фиксирует бедренно-надколенный сустав. Отлично помогает при болевых синдромах, вызванных вывихами или боковым смещением надколенника. Детский ортез надколенника изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное	

сжатие сустава. Открытая конструкция изделия гарантирует индивидуальное его приспособление к нуждам пациента. Специальная форма ортеза «обхватывает» надколенник и предотвращает его неконтролируемое перемещение, а также удерживает его в пределах оси сустава, обеспечивая плавную и безболезненную работу колена. Обеспечивая постоянное сжатие.

Показания

- боковой вывих надколенника;
- нестабильность надколенника;
- легкая нестабильность коленного сустава;
- боль в бедренно-надколенном суставе;
- расстройства оси коленного сустава;
- привычные и травматические подвывихи надколенника.

Технические характеристики



Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 22,5 см	23 — 26 см	26,5 — 30 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-04, Размер 1	Д x Ш x Г (8 см, 9,5 см, 2 см), Масса 0,019 кг
FIX-KD-04, Размер 2	Д x Ш x Г (9 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,022 кг
FIX-KD-04, Размер 3	Д x Ш x Г (12 см, 13 см, 2 см), Масса 0,025 кг

FIX-KD-05

Общее описание

Ортез колена FIX-KD-05 это анатомичной формы повязка, обеспечивающая снятие тяжести в области связок надколенника и предотвращающая его смещение к суставным поверхностям и хондромалицию. Детская надколенниковая повязка FIX-KD-05 изготовлена из тонкого цветного неопрена анатомичной формы, снизу покрытого слоем медицинского силикона, который воздействует на больное место при каждом движении, улучшая фиксирование ортеза на конечности. Детский ортез FIX-KD-05 производит местное давление на связку и поддерживает надколенник. Благодаря этому действию снижается сила воздействия четырехглавой мышцы бедра на большеберцовое сухожилие, уменьшая



таким образом боль в этой области. Кроме того, снимая тяжесть в надколеннике, ортез уменьшает боль в бедренно-надколенном суставе и предотвращает хондромалицию надколенника.

Показания

- колено прыгуна;
- бедренно-надколенный конфликт;
- воспаление связок надколенника;
- болезнь Осгуда–Шлаттера;
- хондромалиция надколенника.

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2
Обхват под коленной чашечкой 16 — 24 см	Обхват под коленной чашечкой 24,5 — 33 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-05, Размер 1	Д x Ш x Г (4 см, 5,5 см, 2 см), Масса 0,005 кг
FIX-KD-05, Размер 2	Д x Ш x Г (4 см, 8 см, 2 см), Масса 0,007 кг

FIX-KD-06

Общее описание

Ортез FIX-KD-06 обеспечивает компрессию, фиксирование и защиту коленного сустава. Ортез оснащен надколенниковым кольцом, фиксирующим надколенник и снимающим тяжесть в области бедренно-надколенного сустава. Оснащен боковыми гибкими вставками, поэтому он отлично подойдет при нестабильности колена. Детский ортез колена FIX-KD-06 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Закрытая конструкция изделия гарантирует полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие. Спереди ортеза размещено специальное надколенниковое кольцо, которое надежно фиксирует надколенник, предотвращая его вывихи. Кроме того, кольцо удерживает надколенник в пределах оси коленного сустава, поэтому его работа происходит плавно и безболезненно. Кроме того, по бокам ортеза используются гибкие вставки, дополнительно фиксирующие коленный сустав, а два дополнительных передних ремня предотвращают травмы коленных связок и дополнительно фиксируют изделие на конечности. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей. Наш ортез колена оснащен сверху специальными держателями, помогающими надевать



ортез. Показания • растяжение/вывих коленного сустава; • нестабильность колена; • легкие повреждения связок ACL, LCL, MCL; • перенапряжение сухожилия надколенника; • вывих и нестабильность надколенника; • расстройства проприоцепции. Технические характеристики Универсальное изделие на правое и левое колено.						
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-06, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 8,5 см, 2 см), Масса 0,072 кг
FIX-KD-06, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 9,5 см, 2 см), Масса 0,078 кг
FIX-KD-06, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 11 см, 2 см), Масса 0,085 кг
FIX-KD-06, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 12 см, 2 см), Масса 0,093 кг
FIX-KD-06, Размер 5	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 2 см), Масса 0,101 кг
FIX-KD-06, Размер 6	Д x Ш x Г (25 см, 14,5 см, 2 см), Масса 0,108 кг
FIX-KD-06, Размер 7	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 2 см), Масса 0,116 кг

FIX-KD-07	
Общее описание Ортез FIX-KD-07 является активным ортезом колена, обеспечивающим компрессию, фиксирование и активную поддержку передней крестообразной связки (ACL). Детский ортез колена FIX-KD-07 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Эластичные обхватывающие ремни, скрещающиеся под коленом, фиксируют голень и снимают тяжесть в области передней крестообразной связки ACL, имеет закрытую конструкцию, гарантирующую полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие, что очень важно при	

повреждении связки ACL. Кроме того, по бокам ортеза используются гибкие вставки, дополнительно фиксирующие коленный сустав.

Показания

- растяжение коленного сустава;
- легкие повреждения связок колена ACL, LCL, MCL;
- вывихи коленного сустава;
- нестабильность колена;
- нестабильность надколенника;
- воспалительные процессы колена;
- расстройства проприоцепции.

Технические характеристики

Универсальное изделие на правое и левое колено.

Общая длина изделия:

1: 18 см

2: 19 см

3: 21 см

4: 23 см

5: 23 см

6: 24 см

7: 24 см

Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-07, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 8,5 см, 3 см), Масса 0,080 кг
FIX-KD-07, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 9,5 см, 3 см), Масса 0,086 кг
FIX-KD-07, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 11 см, 3 см), Масса 0,093 кг
FIX-KD-07, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 12 см, 3 см), Масса 0,100 кг
FIX-KD-07, Размер 5	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 3 см), Масса 0,108 кг
FIX-KD-07, Размер 6	Д x Ш x Г (26 см, 14 см, 3 см), Масса 0,116 кг
FIX-KD-07, Размер 7	Д x Ш x Г (26 см, 15 см, 2 см), Масса 0,124 кг

Общее описание

Ортез FIX-KD-08 является активным ортезом колена, обеспечивающим компрессию, фиксирование и активную поддержку связок коленного сустава. Детский ортез колена изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Эластичные обхватывающие ремни, скрещающиеся над и под коленом, фиксируют бедро и голень, предотвращая неконтролируемые вращательные движения связок колена. Натяжение крестообразных ремней свободно регулируется в соответствии с потребностями пациента. Ортез колена имеет закрытую конструкцию, гарантирующую полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие, что очень важно при повреждении связок. Кроме того, по бокам ортеза используются гибкие вставки, дополнительно фиксирующие коленный сустав. Обеспечивая постоянное сжатие, ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей. Ортез колена оснащен сверху специальными держателями, помогающими надевать ортез.

Показания

- растяжение коленного сустава
- легкие повреждения связок колена ACL, LCL, MCL
- вывихи коленного сустава
- нестабильность колена
- нестабильность надколенника
- воспалительные процессы колена
- расстройства проприоцепции

Технические характеристики

Универсальное изделие на правое и левое колено.

Общая длина изделия:

- 1: 18 см
- 2: 19 см
- 3: 21 см
- 4: 23 см
- 5: 23 см
- 6: 24 см
- 7: 24 см



Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена

19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см
------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-08, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 8,5 см, 2 см), Масса 0,099 кг
FIX-KD-08, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 9,5 см, 2 см), Масса 0,106 кг
FIX-KD-08, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 10 см, 2 см), Масса 0,114 кг
FIX-KD-08, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 11 см, 2 см), Масса 0,123 кг
FIX-KD-08, Размер 5	Д x Ш x Г (23 см, 12 см, 2 см), Масса 0,132 кг
FIX-KD-08, Размер 6	Д x Ш x Г (27 см, 13 см, 2 см), Масса 0,142 кг
FIX-KD-08, Размер 7	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2 см), Масса 0,152 кг

FIX-KD-09

Общее описание

Детский ортез коленного сустава FIX-KD-09 является отличным решением в случае необходимости фиксации коленного сустава и обеспечения боковой стабилизации. Ортез колена оснащен двумя обхватывающими ремнями, которые дополнительно фиксируют изделие на конечности, предотвращая его сползание и смещение даже во время повышенной активности вашего ребенка. Кроме того, ортез оснащен алюминиевыми боковыми шинами 1R orthodesign, с возможностью установления угла изгиба и выпрямления колена каждые 15°, обеспечивающим, в зависимости от потребностей, ограниченную подвижность или полное обездвижение сустава.

Показания

- вывих коленного сустава
- растяжение коленного сустава
- нестабильность колена
- повреждения связок колена ACL, LCL, MCL
- повреждения менисков
- перенапряжение сухожилия надколенника
- болезнь Осгуда-Шлаттера
- болезнь Синдинга-Ларсена-Йохансона
- ревматоидное воспаление суставов у молодых
- неспецифическое воспаление костей
- некроз костей
- реконструкция коленных связок
- другие операции коленного сустава



Технические характеристики Общая длина изделия: 1: 25 см 2: 27 см 3: 27 см		
Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
23 — 26 см	26,5 — 29 см	29,5 — 33 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-09, Размер 1	Д x Ш x Г (26 см, 14 см, 6 см), Масса 0,222 кг
FIX-KD-09, Размер 2	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 6 см), Масса 0,238 кг
FIX-KD-09, Размер 3	Д x Ш x Г (27 см, 17 см, 6 см), Масса 0,255 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

FIX-KD-10	
Общее описание Ортез колена оснащен двумя обхватывающими ремнями, которые дополнительно фиксируют изделие на конечности, предотвращая его сползание и смещение даже во время повышенной активности вашего ребенка. Кроме того, ортез оснащен алюминиевыми боковыми шинами 1R orthodesign, с возможностью установления угла изгиба и выпрямления колена каждые 15°, обеспечивающим, в зависимости от потребностей, ограниченную подвижность или полное обездвижение сустава. Ортез имеет открытую конструкцию, поэтому его можно использовать даже для детей с массивными отеками и большой диспропорцией между обхватом бедра и голени. Кроме того, ортез оснащен двумя передними и двумя задними обхватывающими ремнями, дополнительно фиксирующими изделие на конечности, предотвращая его сползание и смещение даже во время повышенной активности вашего ребенка. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей. Показания	

• вывих коленного сустава • растяжение коленного сустава • нестабильность колена • повреждения связок колена ACL, LCL, MCL • повреждения менисков • ревматоидное воспаление суставов у молодых • неспецифическое воспаление костей • некроз костей • другие операции коленного сустава Технические характеристики Общая длина изделия: 1: 25 см 2: 27 см 3: 27 см		
Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
23 — 26 см	26,5 — 29 см	29,5 — 33 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-10, Размер 1	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 5 см), Масса 0,231 кг
FIX-KD-10, Размер 2	Д x Ш x Г (28 см, 16 см, 5 см), Масса 0,260 кг
FIX-KD-10, Размер 3	Д x Ш x Г (28 см, 18 см, 5 см), Масса 0,289 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

FIX-KD-12	
Общее описание Детский ортез колена FIX-KD-12 оснащен алюминиевыми двухосными шинами, обеспечивающими боковую стабилизацию колена и предотвращающими его растяжение. Спереди ортеза мы разместили специальное надколенниковое кольцо, которое надежно фиксирует надколенник, предотвращая его вывихи. Кроме того, кольцо удерживает надколенник в пределах оси коленного сустава, поэтому его работа происходит плавно и безболезненно. Наш ортез колена оснащен двумя обхватывающими ремнями, дополнительно фиксирующими изделие на конечности, предотвращая его сползание и смещение даже при повышенной активности вашего ребенка. Обеспечивая постоянное	

сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления после повреждения мягких тканей.

Показания

- вывих коленного сустава
- растяжение коленного сустава
- нестабильность колена
- повреждения связок колена ACL, LCL, MCL
- повреждения менисков
- перенапряжение сухожилия надколенника
- болезнь Осгуда–Шлаттера
- болезнь Синдинга-Ларсена-Йохансона
- ревматоидное воспаление суставов у молодых
- неспецифическое воспаление костей
- некроз костей
- реконструкция коленных связок
- другие операции коленного сустава

Технические характеристики

Размер универсальный

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-12, Размер универсальный

Д x Ш x Г (28 см, 15 см, 5 см), Масса 0,213 кг

FIX-KD-13

Общее описание

Ортез FIX-KD-13 обеспечивает компрессию, фиксирование и защиту коленного сустава. Специальный фиксатор надколенника снимает тяжесть в области бедренно-надколенного сустава и обеспечивает надколеннику осевую функцию. Ортез отлично подойдет при легком растяжении колена, а также улучшает проприоцептивность. Детский ортез колена FIX-KD-13 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. Закрытая конструкция изделия гарантирует полное прилегание изделия к конечности и таким образом выполняет проприоцептивное действие.

Показания

- растяжение коленного сустава
- нестабильность колена
- легкие повреждения связок колена ACL, LCL, MCL
- перенапряжение сухожилия надколенника
- расстройства проприоцепции
- боковой вывих надколенника
- нестабильность надколенника



• легкая нестабильность коленного сустава • боль в бедренно-надколенном суставе • расстройства оси коленного сустава • привычные и травматические подвывихи надколенника						
Технические характеристики						
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена	Обхват колена
19 — 21 см	21,5 — 23,5 см	24 — 26 см	26,5 — 28,5 см	29 — 31 см	31,5 — 33,5 см	34 — 36 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-13, Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 10 см, 2 см), Масса 0,139 кг
FIX-KD-13, Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 10,5 см, 2 см), Масса 0,151 кг
FIX-KD-13, Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 11,5 см, 2 см), Масса 0,165 кг
FIX-KD-13, Размер 4	Д x Ш x Г (23 см, 12,5 см, 2 см), Масса 0,179 кг
FIX-KD-13, Размер 5	Д x Ш x Г (23 см, 14 см, 2 см), Масса 0,192 кг
FIX-KD-13, Размер 6	Д x Ш x Г (28 см, 15 см, 2 см), Масса 0,209 кг
FIX-KD-13, Размер 7	Д x Ш x Г (28 см, 16 см, 2 см), Масса 0,224 кг

AM-KDX-01/1RE

Общее описание

Ортез имеет 2 ремня на бедро и на голень с анатомической формы пряжками. Ремни имеют регулируемую длину. Также ортез имеет антискользкую систему из силикона предотвращающую съезжание ортеза. Ремни на липучках позиционируют ортез и обеспечивают прилегание к ноге и эффективную стабилизацию сустава. Ортез можно подогнать для любой формы ноги. Ортез имеет систему быстрых застёжек спереди что улучшило его функциональность. Система позволяет запомнить установки длины каждого ремня. Что обеспечивает идентичную компрессию при каждом одевании ортеза.

Важная характеристика изделия — это его универсальность. Ортез можно подогнать для каждого



пациента, он подходит и на левую и на правую конечность. Показания - Послеоперационная реабилитация - Травмы связок (ACL), - Артроскопия коленного сустава - Реконструкция / замена связок (ACL) - Реконструкция мениска Технические характеристики Размер универсальный Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 см — макс 75 см Обхват икры 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 см — макс 60 см Длина от колена до паха - мин 26 см – макс 30,5 см Длина от колена до голени - мин 26,5 см – макс 32,5 см	
--	--

Габаритные размеры и масса

AM-KDX-01/1RE, Размер универсальный	Д x Ш x Г (54 см, 28 см, 7 см), Масса 0,811 кг
--	--

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.
Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.
Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KDX-01/2R	
Общее описание Универсальный ортез на нижнюю конечность с регулировкой подвижности сустава 4Range это оптимальное средство для иммобилизации после артроскопической операции. Изделие очень легкое. Имеет 2 1-осные боковые шины. Шины оборудованы шарнирами с регулировкой угла сгибания и разгибания с шагом 10°, изменение производится без специальных инструментов. Расположение шин и их форма гарантируют анатомическое прилегание изделия к конечности и идеальную стабилизацию сустава. Движение в шарнирах максимально приближены к анатомическому движению сустава. Кроме того шины имеют регулировку длины. Ортез имеет систему мягких, адаптирующихся к форме конечности пелот с силиконовыми полосками, предотвращающими съезжание ортеза. Ремни на липучках позиционируют ортез и обеспечивают прилегание к ноге и эффективную стабилизацию сустава. Ортез можно подогнать для любой формы ноги. Очень важным свойством этого ортеза есть то, что универсальный, адаптируется для любого пациента, подходит на левую и на правую ногу.	

Показания - Послеоперационная реабилитация - Травмы связок (ACL), - Артроскопия коленного сустава - Реконструкция / замена связок (ACL) - Реконструкция мениска	
Технические характеристики Размер универсальный Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 – макс 75 см Обхват икры 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 – макс 60 см Длина от колена до паха - мин 22 – макс 27 см Длина от колена до голени - мин 26 – макс 35 см	

Габаритные размеры и масса

AM-KDX-01/2R, Размер универсальный	Д x Ш x Г (47 см, 23 см, 7 см), Масса 0,95 кг
---	---

Регулировка угла сгибания: 90, 70, 40, 30.
 Шаг регулировки: 10-30 градусов.
 Регулировка угла разгибания: 30, 10, 0, -10.
 Шаг регулировки: 10-20 градусов.

OKD-03	
Общее описание Ортез иммобилизирующий нижнюю конечность OKD-03 изготовлен из материала приятного для кожи пациента. Это мягкий, неэластичный материал с верхом из велкроткани и мягкой хлопчатой подкладкой. Такая конструкция ортеза позволяет индивидуально, точно и в простой способ подогнать изделие к телу пациента и обеспечивает полную стабилизацию конечности. Ортез имеет: • Мягкий открытый рукав, позволяющий адаптировать ортез для разных обхватов нижней конечности. • Систему ремней на липучках, обеспечивающих нужное прилегание изделия к телу и более эффективную стабилизацию конечности. • Систему анатомической формы алюминиевых боковых шин с независимым креплением к рукаву. Такая конструкция ортеза позволяет индивидуально, точно и в простой способ подогнать изделие к телу пациента и обеспечивает полную стабилизацию конечности.	
Показания • вывихов коленного сустава, • растяжения связок колена,	

• боковая нестабильность коленного сустава, • травмы связок колена LCL, MCL и ACL, • после артроскопии коленного сустава, • после операций на колене	
Технические характеристики Размер универсальный Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки - 40-65 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки - 30-50 см Длина изделия - 55 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-03, Размер универсальный	Д x Ш x Г (54 см, 28 см, 4 см), Масса 0,555 кг
-------------------------------------	---

OKD-03/10	
Общее описание Ортез иммобилизирующий нижнюю конечность OKD-03 изготовлен из материала приятного для кожи пациента. Это мягкий, незластичный материал с верхом из велкро и мягкой хлопчатой подкладкой. Такая конструкция ортеза позволяет индивидуально, точно и в простой способ подогнать изделие к телу пациента и обеспечивает полную стабилизацию конечности. Ортез имеет: • Открытого мягкого рукава, который позволяет адаптировать ортез к разным обхватам конечности. • Системы ремней на липучках велкро обеспечивающих плотное прилегание к телу и эффективную стабилизацию конечности. • Двух анатомически профилированных шин и двух боковых шин, согнутых под углом 10°. • Системы независимого крепления к рукаву. Такая конструкция позволяет индивидуально, легко и точно адаптировать ортез к пациенту и обеспечивает полную стабилизацию конечности. Ортопедические шины, примененные в изделии, это набор четырех (двух задних и двух боковых) анатомической формы шин изготовленных из дюралюминия. Они имеют высокую механическую прочность, благодаря чему ортезы с ними подходят для иммобилизации конечностей. Показания • вывих коленного сустава, • растяжение связок коленного сустава, • боковая нестабильность коленного сустава, • повреждения связок коленного сустава LCL, MCL и ACL, • после реконструкции связок, • на ранних этапах после других операций на колене,	

• после других операций (ортопедия).	
Технические характеристики Размер универсальный Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки - 40-65 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки - 30-50 см Длина изделия - 55 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-03/10, Размер универсальный	Д x Ш x Г (54 см, 28 см, 4 см), Масса 0,58 кг
--	---

OKD-03/20	
Общее описание Ортез, обездвиживающий нижнюю конечность под углом сгибания 20 градусов изготовлен из материала приятного для кожи пациента. Это мягкий, неэластичный материал с верхом из велкроу и мягкой хлопчатой подкладкой. Ортопедические планки, которые использовались в изделии, представляют собой набор из четырех (двух задних и двух боковых) анатомически сформированных ортопедических планок. Эти планки изготовлены из высококачественного дюралюминия, они обладают высокой механической прочностью (прочность более 400 МПа). Использование этого материала делает тугор идеальными для укрепления нижних конечностей после артроскопических процедур на коленном суставе.	
Показания • вывих коленного сустава, • растяжение связок коленного сустава, • боковая нестабильность коленного сустава, • повреждения связок коленного сустава LCL, MCL i ACL, • после реконструкции связок, • на ранних этапах после других операций на колене, • после других операций (ортопедия).	
Технические характеристики Размер универсальный Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки - 40-65 см Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки - 30-50 см Длина изделия - 55 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-03/20, Размер универсальный	Д x Ш x Г (54 см, 30 см, 4 см), Масса 0,58 кг
--	---

OKD-16

Общее описание

Ортез коленного сустава OKD-16 принадлежит к группе 4classic и является универсальным, безразмерным изделием. Ортез OKD-16 имеет открытую форму, облегчающую одевание изделия, он мягкий и эластичный, поэтому хорошо прилегает к конечности и обеспечивает нужную компрессию сустава. Компрессия уменьшает гематомы, отеки и боль. Кольцо анатомической формы стабилизирует надколенник и предотвращает его вывих. Кроме того, ортез имеет систему 4 боковых ортопедических шин.

Эта система сконструирована так, чтобы в зависимости от окружности сустава можно было изменять положение шин.

Эти свойства ортеза позволяют с комфортом носить его при физической активности.

Показания

- Вывих коленного сустава,
- Растяжение связок коленного сустава,
- Боковая нестабильность коленного сустава,
- Травмы связок колена LCL, MCL и ACL,
- После реконструкции связок колена,
- После других операций на колене (ортопедия),
- Привычный и травматический вывих надколенника.

Технические характеристики

Общая высота ортеза: 28 см

Размер универсальный Обхват колена - мин 30 — макс 46 см

Обхват колена - мин 46 — макс 59 см



Габаритные размеры и масса

OKD-16, Размер универсальный

Д x Ш x Г (29 см, 23 см, 4 см), Масса 0,389 кг

OKD-17

Общее описание

Компактная форма в виде повязки позволяет носить ортез под одеждой не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. Применение ортеза Reh4Mat Okd-17 позволяет разгрузить сухожилия, уменьшает воспалительные процессы и способствует скорейшему восстановлению в периоде реабилитации. Бандаж имеет универсальную форму и применяется на левую и правую

ногу. Благодаря фиксирующим ремням на липучках регулируется объем и степень компрессии. На внутренней части ортеза вставлены силиконовые ячейки, которые обеспечивают микромассажный эффект во время движения.

Показания

- Синдром (воспаление) илиотибиального тракта

Технические характеристики



Подходит на обе конечности

Общая высота изделия: 6 см

Размер универсальный

Обхват над коленом - мин 25 см — макс 40 см

Габаритные размеры и масса

OKD-17, Размер универсальный

Д x Ш x Г (6 см, 14 см, 4 см), Масса 0,06 кг

OKD-18

Общее описание

Ортез коленного сустава OKD-18 принадлежит к группе 4classic и является универсальным, безразмерным изделием.

Ортез колена OKD-18 имеет открытую форму, облегчающую одевание изделия. Ортез мягкий и эластичный, поэтому хорошо прилегает к конечности и обеспечивает нужную компрессию сустава.

Компрессия уменьшает гематомы, отеки и боль.

Кольцо анатомической формы стабилизирует надколенник и предотвращает его вывих.

Кроме того, ортез имеет систему боковых ортопедических шин с регулировкой подвижности сустава с шагом 15°.



Показания

- Вывих коленного сустава,
- Растяжение связок коленного сустава,
- Боковая нестабильность коленного сустава,
- Травмы связок колена LCL, MCL и ACL,
- После реконструкции связок колена,
- После других операций на колене (ортопедия),
- Привычный и травматический вывих надколенника.

Технические характеристики Универсальный продукт для левого и правого колена.	
Размер универсальный: Обхват колена - мин 30 — макс 46 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-18, Размер универсальный	Д x Ш x Г (33 см, 19 см, 4 см), Масса 0,69 кг
-------------------------------------	---

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-19	
Общее описание Ортопедическое приспособление представляет собой компактную тугую повязку для подколенной зоны. Благодаря удобной застежке на липучке изделие универсально – имеет один размер и применяется на левую и правую ногу. Уплотнение в области подколенного – анатомическая подушечка: • компенсирует нагрузку на сухожилия и связки надколенника • поддерживает сустав и мышечлок большеберцовой кости • уменьшает болевой синдром • замедляет дегенеративные изменения • способствует ускорению процесса восстановления. Показания 1. «Колено прыгуна» — тендинит надколенника, 2. Феморопателлярный конфликт, 3. Тендинит связки надколенника, 4. Болезнь Осгуда-Шляттера, 5. хондромалиция надколенника. Технические характеристики Общая высота изделия: 8 см	
Размер универсальный Обхват колена под коленной чашечкой - мин 26 см — макс 40 см	

Габаритные размеры и масса

OKD-19, Размер универсальный	Д x Ш x Г (8 см, 14 см, 3 см), Масса 0,072 кг
-------------------------------------	---

OKD-20

Общее описание

Ортез колена OKD-20 имеет специальное эластичное уплотнение стабилизирующее надколенник. Благодаря применению велкроткани, его можно устанавливать в любом месте в зависимости от вида вывиха. Уплотнение для надколенника имеет форму эластичного валика в форме буквы «L» со свойствами липучки позволяющей крепить его к поверхности из велкроткани ортеза. Ортез OKD-20 не боится воды, так что его спокойно можно носить в водной среде, а также стирать и промывать. Ортез имеет открытую форму. Такая конструкция позволяет лучше подогнать его и позволяет применять один универсальный размер на обе конечности: и на левую и на правую ногу.

Показания

- Вывих надколенника (боковой, медиальный, вертикальный и горизонтальный)
- Нарушение траектории надколенника
- Пателлофemorальный конфликт (Пателлофemorальный синдром)
- Нестабильность пателлофemorального сустава

Технические характеристики

Общая высота изделия: 27 см



Размер универсальный

Обхват колена - мин 30 — макс 46 см

Габаритные размеры и масса

OKD-20, Размер универсальный

Д x Ш x Г (27 см, 18 см, 5 см), Масса 0,642

OKD-25

Общее описание

Ортез позиционирующий коленную чашечку OKD-25 состоит из пластиковой обоймы, имеющей анатомическую форму с четырьмя поворотными пряжками. Внутри имеется мягкая хлопчатая подкладка, абсорбирующая пот. Задние ремни позволяют подогнать ортез под анатомические особенности пациента и правильно разместить ортез на конечности. Анатомическая форма ортеза позволяет идеально стабилизировать коленную чашечку в оси сустава и обеспечить ее правильную осевую работу. Кроме того, ортез опирается на бугристости большеберцовой кости снимая нагрузку со связки коленной чашечки.



Жесткие элементы ортеза окружают коленную чашечку, предотвращая ее перемещение и дислокацию. Поворотные пряжки позволяют свободно двигаться с ортезом не ограничивая диапазона подвижности сустава. Округлые подкладки на липучках, имеющиеся в комплекте, позволяют разгружать бугристости колена и точнее подгонять ортез к колену. Ортез позиционирующий коленную чашечку очень эффективный и простой в использовании. Предотвращает вывих коленной чашечки, синдром избыточного бокового давления, позволяет поддерживать плавную осевую работу пателлофemorального сустава.

Показания

1. Колено прыгуна,
2. Пателлофemorальный болевой синдром,
3. Патенторальный тендинит,
4. Болезнь Осгуда-Шлаттера,
5. Хондромалиция (раздраженная коленная чашечка),
6. Синдром избыточного бокового давления,
7. Вывих надколенника.

Технические характеристики

Размер универсальный

Общая высота изделия: 9 см

Габаритные размеры и масса

OKD-25, Размер универсальный

Д x Ш x Г (10 см, 20 см, 4 см), Масса 0,107 кг

AM-KDX-01 UNIVERSO

Общее описание

AM-KDX-01 UNIVERSO-это оптимальное послеоперационное оборудование после артроскопических процедур. Механизмы шин имеют диапазон регулировки угла сгибания и разгибания каждые 15 градусов, что позволяет систематически менять положение сустава по мере продвижения реабилитации. Эти механизмы сконструированы таким образом, что изменение угла изгиба и разгибания происходит без использования каких-либо инструментов, а дополнительная система защиты предотвращает изменение угла посторонними лицами. Действие ортеза заключается в стабилизации латерально-медиальной и переднезадней коленной чашечки. Эта модель имеет две бедренные и две нижние стропы для ног, скрепленные анатомическими пластиковыми пряжками.

Показания

- послеоперационная реабилитация – реконструкция



ACL, MCL, PCL, LCL и поврежденные суставные мениски – повреждение мягких тканей колена (связки, мениск) – повреждения суставной поверхности большеберцовой кости – реконструкция связки надколенника – перелом мыщелков бедренной кости – закрытые и открытые переломы колена – растяжения и вывих колена – остеотомия большеберцовой кости (HTOs). Технические характеристики Есть вариант на левое и правое колено. Размер универсальный о́кружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 – макс 75 см о́кружность голени 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 – макс 60 см диапазон расстояния от коленной щели до паха - мин 23 – макс 27 см диапазон расстояния от коленного сустава до лодыжки - мин 28 – макс 36,5 см	
--	--

Габаритные размеры и масса

AM-KDX-01 UNIVERSO, Размер универсальный	Д x Ш x Г (49 см, 25 см, 6 см), Масса 0,792 кг
--	---

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.
Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.
Шаг регулировки: 15 градусов.

АТОМ/2RA 4ARMY	
Общее описание Ортез создает сопротивление силам, воздействующим на варусное или вальгусное колено, а также нивелирует негативный эффект передней трансляции большеберцовой кости. Это четырехточечный ортез из высококачественного сплава алюминия с порошковым покрытием. В ортезе установлены два анатомических шарнира 2RA с регулировкой диапазона подвижности сустава с шагом в 20°. Система разработана для уменьшения напряжения и защиты колена. Внешний слой из велкро-ткани позволяет свободно пристегивать липучками ортопедические шины и адаптировать изделие к телу пациента благодаря гибкости при застегивании. Ортез также позволяет контролировать вальгусную и варусную деформацию, обеспечивает максимум контроля и защиты колена. Показания • Нестабильность связок коленного сустава ACL, PCL, MCL и LCL • Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL коленного сустава	

• Смешанные травмы ACL / PCL • Гиперэкстензии колена Технические характеристики				
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра 15 см выше центра коленной чашечки
36-40 см	40-44 см	44-48 см	48-52 см	52-56 см
Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки	Обхват голени 15 см ниже центра коленной чашечки
26-30 см	30-34 см	34-38 см	38-42 см	42-46 см
Длина шины	Длина шины	Длина шины	Длина шины	Длина шины
37 см	37 см	37 см	37 см	37 см

Габаритные размеры и масса

ATOM/2RA 4ARMY, Размер XS	Д x Ш x Г (40 см, 14 см, 13 см), Масса 0,445 кг
ATOM/2RA 4ARMY, Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 16 см, 13 см), Масса 0,478 кг
ATOM/2RA 4ARMY, Размер M	Д x Ш x Г (40 см, 18 см, 13 см), Масса 0,514 кг
ATOM/2RA 4ARMY, Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 20 см, 13 см), Масса 0,553 кг
ATOM/2RA 4ARMY, Размер XL	Д x Ш x Г (40 см, 22 см, 13 см), Масса 0,592 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

RAPTOR BIONIC 4ARMY	
Общее описание Орtez колена RAPTOR BIONIC 4Army, в военной версии имеет решения, позволяющие применять его даже в экстремальных условиях! Орtez создает сопротивление силам, воздействующим на варусное или вальгусное колено. Это четырехточечный орtez из высококачественного сплава алюминия с порошковым	

покрытием. Система 4 точек опоры динамическая, самая эффективная система защиты коленного сустава.

Система разработана для уменьшения напряжения и защиты колена, а в ортезе RAPTOR BIONIC 4army выглядит следующим образом:

- 1 точка прилагается к передней части бедра через прочную алюминиевую раму
- 2 точка находится на задней стороне икры и действует на конечность через раму и ремень
- 3 точка — это ремень над коленом, крепящийся на задней стороне бедра
- 4 точка — это ремень, крепящийся на передней стороне голени, который создает так называемую предварительную нагрузку (preload) на бугристость большеберцовой кости (tuberositas tibiae) сдвигая берцовую кость немного назад, что в результате уменьшает напряжение связки ACL.

Показания

- Нестабильность связок коленного сустава ACL, PCL, MCL и LCL
- Реабилитация после реконструкции связок ACL или PCL коленного сустава
- Смешанные травмы ACL / PCL
- Повреждение менисков
- Гиперэкстензии колена

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 40-44 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 30-34 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 44-48 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 34-38 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 48-52 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 38-42 см	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки 52-56 см окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки 42-46 см

Габаритные размеры и масса

RAPTOR BIONIC 4ARMY, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 14,5 см, 12 см), Масса 0,642 кг
RAPTOR BIONIC 4ARMY, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 16 см, 12 см), Масса 0,690 кг
RAPTOR BIONIC 4ARMY, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 12 см), Масса 0,742 кг
RAPTOR BIONIC 4ARMY, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 18,5 см, 12 см), Масса 0,794 кг

RAPTOR/2RA SHORT

Общее описание

Ортез колена RAPTOR short стабилизирует сустав в сагиттальной и передней плоскостях. Он имеет 4-точечную систему поддержки, которая отлично стабилизирует и разгружает коленный сустав. Ортез был изготовлен из чрезвычайно прочной передней и задней рамы из легкого алюминия 6061 T6, применяемого в авиации. Такое решение гарантирует лучшую стабилизацию среди ортезов, доступных на рынке. Для лучшей защиты ортеза от влаги рама была покрыта горячим порошковым покрытием, что делает ортез стойким к воздействию воды или пота пациента. В ортезе установлены пять стабилизирующих ремней, оснащенных силиконовыми антискользящими подушками, которые обеспечивают дополнительную поддержку и предотвращают скольжение ортеза на конечности. Внутренняя мягкая обивка рамы изготовлена из пены, обладающей водонепроницаемыми и разгрузочными свойствами.



Показания

- Растяжение колена
- Вывих колена
- Повреждение MCL, ACL и LCL, и PCL
- Повреждение мениска колена
- Нестабильность коленного сустава

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки
40-44 см	44,5-48 см	48,5-52 см	52,5-56 см
окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки
30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см

Габаритные размеры и масса

RAPTOR/2RA SHORT, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 14,5 см, 12 см), Масса 0,552 кг
RAPTOR/2RA SHORT, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 16 см, 12 см), Масса 0,594 кг
RAPTOR/2RA SHORT, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 12 см), Масса 0,639 кг

RAPTOR/2RA SHORT, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 18,5 см, 12 см), Масса 0,684 кг
------------------------------------	---

Регулировка угла сгибания: 0, 30, 55, 75, 95, 110.

Шаг регулировки: 15-30 градусов.

Регулировка угла разгибания: 15, 75.

Шаг регулировки: 60 градусов.

RAPTOR/2 SHORT			
Общее описание Ортез колена RAPTOR SHORT стабилизирует сустав в сагиттальной и фронтальной плоскости. Имеет 4-точечную систему поддержки, которая идеально стабилизирует и разгружает колено. В ортезе 5 стабилизирующих ремней с силиконовыми подушками от смещения. Внутренняя мягкая обивка изготовлена из водостойкой пены. Ортез благодаря своим характеристикам имеет широкое применение: • Спорт, • Дом, • Работа, • Хобби. Показания • Скручивание колена • Вывих колена • Травмы связок колена MCL, ACL, а также LCL и PCL • Повреждение мениска колена • Нестабильность коленного сустава Технические характеристики Есть на левую и на правую конечность. Общая длина продукта: S — XL: 36 см			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки	окружность бедра на 15 см выше центра коленной чашечки
40-44 см	44,5-48 см	48,5-52 см	52,5-56 см
окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки	окружность голени на 15 см ниже центра коленной чашечки
30-34 см	34,5-38 см	38,5-42 см	42,5-46 см

Габаритные размеры и масса

RAPTOR/2 SHORT, Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 14,5 см, 11 см), Масса 0,472 кг
RAPTOR/2 SHORT, Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 16 см, 11 см), Масса 0,506 кг
RAPTOR/2 SHORT, Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 17 см, 11 см), Масса 0,544 кг
RAPTOR/2 SHORT, Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 18,5 см, 11 см), Масса 0,584 кг

OKD-31			
Общее описание Мягкость и эластичность используемого материала обеспечивает нежную, но эффективную компрессию, улучшая проприоцепцию коленного сустава. Это имеет большое значение, например, при повреждении коленных связок. Ускоряет процесс восстановления и облегчает функционирование. Ортез бесшовный, что снижает риск появления мозолей на коже пациента. Ортез колена OKD-31, как и человеческая кожа, поддерживает оптимальную температуру сустава, что положительно влияет на уменьшение ревматических болевых ощущений. Кроме того, ортез обеспечивает постоянную компрессию и улучшает проприоцепцию сустава после травм или при неврологических расстройствах. Систематическое использование ортеза во время физической активности защищает от травмирования и уменьшает болевые ощущения. Ортез обеспечивает гибкость, но одновременно особенно устойчив к растягиванию. Благодаря этому, он не теряет анатомичной формы после многократного пользования и обеспечивает эффективную компрессию даже при длительном его использовании. Показания • Вывих коленного сустава • Дегенеративные изменения колена • Растяжение коленного сустава • Легкая боковая нестабильность колена • Легкая нестабильность надколенника • При воспалении синовиальных сумок • При изменениях вследствие перегрузки, дегенеративных и воспалительных изменениях • Профилактически при увеличенной физической активности Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват колена 30-34 см	Обхват колена 34,5-38 см	Обхват колена 38,5-42 см	Обхват колена 42,5-46 см

Габаритные размеры и масса

OKD-31, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 12 см, 1 см), Масса 0,035 кг
OKD-31, Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 13,5 см, 1 см), Масса 0,037 кг
OKD-31, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 15 см, 1 см), Масса 0,040 кг
OKD-31, Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 16,5 см, 1 см), Масса 0,043 кг

AM-DOSK-Z/1R		
Общее описание Ортез оснащен магнитным шарниром, обеспечивающим диапазон регулировки движения каждые 15°. В зависимости от необходимости, вы можете ограничить движение сустава или обездвижить его. Коленный ортез AM-DOSK-Z/1R имеет закрытую форму, что делает стабилизацию колена более точной, чем при любом ортезе с открытой структурой, и сам ортез можно использовать вместо традиционной и тяжелой гипсовой иммобилизации. Несмотря на закрытую конструкцию, верхняя часть ортеза имеет съемный ремень на липучке, который позволяет ребенку надевать ортез на ногу, например, в случае массивного отека колена или контузии мышц бедра. Показания вывих коленного сустава растяжение связок колена нестабильность колена травмы связок ACL, MCL и LCL разрывы и травмы мениска тендинит надколенника болезнь Осгуда-Шлаттера болезнь Синдинга-Ларсена-Йоханссона ювенильный ревматоидный артрит (JRA) неспецифический остеоит остеонекроз реконструкция коленных связок другие хирургические процедуры Технические характеристики Общая высота изделия: 1: 26 см 2: 28 см 3: 28 см Универсальное изделие на оба колена.		
Размер 1	Размер 2	
Обхват колена 23-26 см	Обхват колена 26,5-29 см	Обхват колена 29,5-33 см

Подходит для возраста 2 – 5 лет	Подходит для возраста 5 – 8 лет	Подходит для возраста 8 – 12 лет
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Габаритные размеры и масса

АМ-DOSK-Z/1R, Размер 1	Д x Ш x Г (26 см, 13,5 см, 3 см), Масса 0,235 кг
АМ-DOSK-Z/1R, Размер 2	Д x Ш x Г (28 см, 15 см, 3 см), Масса 0,264 кг
АМ-DOSK-Z/1R, Размер 3	Д x Ш x Г (28 см, 16,5 см, 3 см), Масса 0,293 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-DOSK-O/1R	
Общее описание Изделие представляет комбинацию ортопедического текстиля и жестких стабилизирующих элементов. Данная модель относится к категории открытых ортезов и проста в использовании. Накладывать и снимать ребенок может самостоятельно. Пористая и ячеистая структура обеспечивает циркуляцию воздуха. Благодаря чему испаряется излишняя влага, кожа дышит и ортез можно носить с комфортом длительное время. Ортез АМ-DOSK-O/1R оснащен боковыми ортопедическими вставками (шинами) анатомической формы. В области коленного сустава шины соединены между собой механизмом регуляции угла сгибания, что позволяет постепенно увеличивать нагрузку. Регулировка увеличения/уменьшения радиуса осуществляется с шагом в 15 градусов. Механизм имеет блокировку от случайных изменений в виде западающего кольца. Данный ортез фиксируется с помощью клапанов на липучке, а также эластичными ремнями в верхней и нижней части ортеза. Благодаря малому массе и простоте, ребенок с комфортом переносит ограничение подвижности длительное время. Показания • вывих коленного сустава • растяжение связок колена • нестабильность колена • травмы связок колена ACL, MCL и LCL • травмы мениска • ювенильный ревматоидный артрит (JRA) • неспецифический остеоит • остеонекроз • другие хирургические процедуры Технические характеристики	

Универсальное изделие на оба колена. Общая высота изделия: 1: 26 см 2: 28 см 3: 28 см		
Размер 1 Обхват колена 23-26 см Подходит для возраста 2 – 5 лет	Размер 2 Обхват колена 26,5-29 см Подходит для возраста 5 – 8 лет	Размер 3 Обхват колена 29,5-33 см Подходит для возраста 8 – 12 лет

Габаритные размеры и масса

АМ-DOSK-O/1R, Размер 1	Д x Ш x Г (26 см, 14,5 см, 3 см), Масса 0,255 кг
АМ-DOSK-O/1R, Размер 2	Д x Ш x Г (28 см, 16 см, 3 см), Масса 0,285 кг
АМ-DOSK-O/1R, Размер 3	Д x Ш x Г (28 см, 17,5 см, 3 см), Масса 0,313 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

IB-SK/2	
Общее описание Ортез имеет открытую конструкцию, облегчающую ее надевание, особенно для пожилых людей и людей с частичной подвижностью. Боковые части ортеза изготовлены из нового сырья специфика которого заключается в том, что ортез не является гибким, что улучшает стабилизацию коленного сустава. На коже пациента имеется воздушная хлопчатая махровая ткань, внутри полужесткая перфорированная удобная пена, снаружи же установлен медицинский ламинат с паропроницаемой функцией, который для облегчения отвода пота от тела пациента дополнительно перфорирован. Показания • растяжение коленного сустава • вывих коленного сустава • • после перенесенных травм коленного сустава, не требующих или не квалифицированных для оперативного лечения (растяжения с повреждением коллатеральных и крестообразных связок, при надрывах мышечных	

соединений1) • при дегенеративных изменениях в неустойчивости, вызванных травмами или заболеваниями • повреждение связок (ACL, PCL, LCL, MCL)				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Окружность колена 30-34 см	Окружность колена 34-38 см	Окружность колена 38-42 см	Окружность колена 42-46 см	Окружность колена 46-50 см


Габаритные размеры и масса

IB-SK/2, Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 13 см, 3 см), Масса 0,328 кг
IB-SK/2, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 14,5 см, 3 см), Масса 0,353 кг
IB-SK/2, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 16 см, 3 см), Масса 0,380 кг
IB-SK/2, Размер XL	Д x Ш x Г (41 см, 17,5 см, 3 см), Масса 0,407 кг
IB-SK/2, Размер XXL	Д x Ш x Г (44 см, 19 см, 3 см), Масса 0,435 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

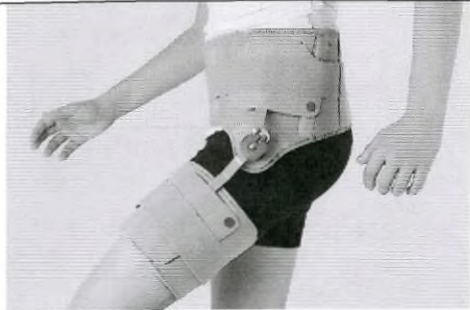AM-SB/1R	
Общее описание Детский ортез бедра AM-SB/1R состоит из мягкого пояса, ремня на бедро и ортопедической шины с шарниром 1R orthodesign, который имеет регулировку угла сгибания каждые 15°. Единая конструкция изделия обеспечивает стабилизацию сустава, ограничивая подвижность бедра по отношению к тазу. Компактный ортез максимально эффективно выполняет свою функцию, но при этом ребенок не чувствует сильного дискомфорта в повседневной жизни. Показания - Болезнь Пертеса (асептический некроз головки бедренной кости у детей) - деформации тазобедренного сустава - вывих (дислокация) тазобедренного сустава - перелом костей тазобедренного сустава - повреждение вертлужной губы - дегенеративные изменения тазобедренного сустава Технические характеристики	

Есть на левую и на правую конечность.	
Размер 1 Обхват в поясе 45-55 см Обхват бедра 25-30 см Полная длина изделия 28 см	Размер 2 Обхват в поясе 55-65 см Обхват бедра 30-35 см Полная длина изделия 38 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SB/1R, Размер 1	Д x Ш x Г (20 см, 28 см, 3 см), Масса 0,238 кг
АМ-SB/1R, Размер 2	Д x Ш x Г (30 см, 33 см, 3 см), Масса 0,278 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

4ARMY-U-01			
Общее описание Ортез имеет новый анатомический крой, а его конструкция дополнительно усилена. Дышащий, но прочный материал отводит влагу от тела и позволяет использовать его даже в экстремальных условиях. Ортез бедра 4army-U-01 обеспечивает превосходное сжатие, что увеличивает циркуляцию крови. Благодаря этому мышцы бедра во время физической активности насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышенную эффективность их работы. Кроме того, ортез уменьшает возможные выпоты и гематомы и защищает мышцы от резких сокращений, приводящих к их разрывам и растяжениям.			
Показания - растяжение мышц бедра - разрыв мышц бедра - повреждение или воспаление седалищно-голеньевых мышц (в основном двуглавые бедра)			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра	Обхват бедра	Обхват бедра	Обхват бедра
48-52 см	52-56 см	56-60 см	60-64 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-U-01, Размер S	Д x Ш x Г (38 см, 19 см, 3 см), Масса 0,198 кг
4ARMY-U-01, Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 21,5 см, 3 см), Масса 0,221 кг
4ARMY-U-01, Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 24 см, 3 см), Масса 0,296 кг
4ARMY-U-01, Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 26,5 см, 3 см), Масса 0,325 кг

AM-OSS-30

Общее описание

Анатомический ортез подойдет для тех, кому нужен ортез с компрессией и разогревающим эффектом мышц бедра во время тренировок, дающее дополнительную защиту. Ортез создан для активных людей и спортсменов. Ортез имеет анатомическую форму и хорошо прилегает к телу.

Показания

- при болях мышц бедра, вызванных травмами или перегрузками (надмерные тренировки или тяжелая физическая нагрузка)
- при опухолях бедра, вызванных травмами или перегрузками
- профилактически при занятиях спортом, приводящим к перегрузке бедра, выполняет защитную функцию в контактных видах спорта.

Технические характеристики



Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра
46-51 см	51-56 см	56-63,5 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSS-30, Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 11,5 см, 5 см), Масса 0,137 кг
AM-OSS-30, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см), Масса 0,152 кг
AM-OSS-30, Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 14,5 см, 5 см), Масса 0,167 кг

AM-SB-08

Общее описание

Ортез бедра AM-SB-08-отличный продукт, предназначенный как для спортсменов, так и для тех, кто работает стоя или на коленях (например, сантехник).

Ортез бедра имеет деликатную боковую жесткость. Это эластичная ортопедическая вставка, которая обеспечивает мягкую стабилизацию, но не ограничивает подвижность сустава. Ортез имеет специальную анатомическую форму, идеально подходит для анатомии пользователя и не скользит во время повышенной физической активности. Ортез AM-SB-08 по всей своей поверхности имеет функцию натяжения, поэтому вы идеально подойдете к любому силуэту. Плавная регулировка сжатия позволяет активно контролировать температуру тела и ускорять процесс заживления.

Показания

- артроз / остеоартроз бедра
- растяжение / разрыв / разрыв мышц бедра
- синдром подвздошно-большеберцовой группы (ITBS)
- воспаление мягких тканей (сухожилий, бурсит)
- повреждение хряща и связок сустава
- после операций на тазобедренном суставе
- профилактически в спорте.

Технические характеристики

Размер универсальный

Обхват талии 5 см ниже пупка - мин 75 см – макс 140 см



Габаритные размеры и масса

AM-SB-08, Размер универсальный

Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см), Масса 0,444 кг

AM-SB-07

Общее описание

Пена, из которой была сделана подушка, обладает достаточной плотностью для ребенка, обеспечивая надежную и безопасную иммобилизацию, не вызывая избыточного давления в тазобедренных суставах. Система подтяжек и ремней предотвращает нежелательное смещение подушки и позволяет быстро и легко снимать и надевать изделие. Кроме того, к ортезу прикреплены 2 клинья, которые располагают нижние конечности под большим или меньшим углом. Клинья можно легко закрепить или отстегнуть при необходимости.

Показания

- дисплазия развития тазобедренного сустава
- врожденный вывих тазобедренного сустава
- контрактуры в тазобедренных суставах
- церебральный паралич (MPD)
- вялость суставов
- дополнительная поддержка в процессе



реабилитации Технические характеристики	
Размер (ширина подушки в см) 16, 18, 20, 22, 24 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-SB-07, Размер 16	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 10 см), Масса 0,158 кг
АМ-SB-07, Размер 18	Д x Ш x Г (26 см, 18 см, 10 см), Масса 0,176 кг
АМ-SB-07, Размер 20	Д x Ш x Г (26 см, 20 см, 10 см), Масса 0,196 кг
АМ-SB-07, Размер 22	Д x Ш x Г (28 см, 22 см, 10 см), Масса 0,218 кг
АМ-SB-07, Размер 24	Д x Ш x Г (28 см, 24 см, 10 см), Масса 0,242 кг

AS-PU-04	
Общее описание Смягчает болевые симптомы мышц бедра, вызванные перегрузкой и травмами. Благодаря удержанию постоянной температуры и эластичному сжатию, обладает противоопухолевым действием и облегчает впитывание жидкости и кровоподтёков после перенесенных травм. Делает возможным более быстрое восстановление работоспособности и возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач. Показания - при болях мышц бедра, вызванных травмами или перегрузками (надмерные тренировки или тяжелая физическая нагрузка) - при опухолях бедра, вызванных травмами или перегрузками - профилактически при занятиях спортом, приводящим к перегрузке бедра, выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Технические характеристики РАЗМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	

Габаритные размеры и масса

AS-PU-04, Размер универсальный	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,27 кг
--------------------------------	---

AS-PU-06

Общее описание

Это универсальный ортез бедренного сустава с регулировкой угла сгибания сустава и отведения нижней конечности. Ортез сделан по принципу MiniMax (максимальный эффект при минимуме изделия) и благодаря такой конструкции обеспечивает максимальную безопасность и защиту при этом имеет небольшие размеры. Ортез, имеет бедренный пояс, ремень на ногу и одноосную боковую шину с регулировкой угла сгибания сустава и с функцией отведения конечности.



Показания

1. После операции по эндопротезированию тазобедренного сустава
2. Вывих и риск вывиха тазобедренного сустава
3. Дисплазия тазобедренного сустава (передняя / задняя)
4. Остеоартрит
5. Коксартроз тазобедренного сустава
6. Нестабильность тазобедренного сустава
7. После операций тазобедренного сустава
8. Необходимость иммобилизации бедра
9. Мышечные контрактуры в области тазобедренного сустава.

Технические характеристики

РАЗМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Габаритные размеры и масса

AS-PU-06, Размер универсальный	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2,5 см), Масса 0,27 кг
--------------------------------	---

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AS-U-01

Общее описание

Данная модель защищает мышцы бедра, стабилизирует и компенсирует нагрузку. Изделие представляет собой текстильную анатомически профилированную основу, выполненную из ортопедического текстиля. Основа ортеза оснащена тремя фиксирующими ремнями с помощью которых можно регулировать степень компрессии. Ремни проходят через полиамидные пряжки и крепятся с помощью застежки на липучке Велкро, что повышает силу фиксации. Данная модель является

универсальной – на левую и правую ногу. Показания - Энтесопатия, - Ушибы, - Растяжение мышц - Растяжение и разрыв мягких тканей - Перегрузки мышц бедра - Боль в области паха во время деятельности Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра	Обхват бедра	Обхват бедра	Обхват бедра
48-52 см	52-56 см	56-60 см	60-64 см

Габаритные размеры и масса

AS-U-01, Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 22,5 см, 3 см), Масса 0,182 кг
AS-U-01, Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 24 см, 3 см), Масса 0,195 кг
AS-U-01, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 26 см, 3 см), Масса 0,210 кг
AS-U-01, Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 28 см, 3 см), Масса 0,225 кг

AS-U-02	
Общее описание Это анатомической формы бандаж с системой трех компрессионных ремней с застежками на липучках велкро и силиконовым микромассажем. Система микромассажа из силикона воздействует на болезненное место во время движений улучшая циркуляцию крови и лучше удерживает бандаж на конечности. Ремни регулируются индивидуально, независимо друг от друга. Ортез хорошо снимает нагрузку и защищает от травм подколенного сухожилия и четырехглавой мышцы бедра.	
Показания - растяжение четырехглавой мышцы бедра - растяжения подколенного сухожилия - ушибы мышц бедра - растяжения мышц бедра - триггерные точки мышц бедра - разрывы сухожилий мышц бедра - проблемы кровообращения в бедре	

Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват бедра	Обхват бедра	Обхват бедра	Обхват бедра
48-52 см	52-56 см	56-60 см	60-64 см

Габаритные размеры и масса

AS-U-02, Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 15,5 см, 3 см), Масса 0,12 кг
AS-U-02, Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 16,5 см, 3 см), Масса 0,13 кг
AS-U-02, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 18 см, 3 см), Масса 0,14 кг
AS-U-02, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 19,5 см, 3 см), Масса 0,15 кг

FIX-KD-11					
Общее описание Детские неопреновые шорты FIX-KD-11 обеспечивают компрессию и фиксирование всего бедренного пояса. Ротационные ремни, прилагающиеся к шортам, обеспечивают фиксирование бедренных костей в положении внешней ротации, без необходимости участия в этом коленных суставов. Закрытая конструкция изделия гарантирует полное прилегание изделия к телу и таким образом выполняет проприоцептивное действие, что очень важно при наличии у ребенка расстройства проприоцепции в области бедренного пояса. Неопреновые шорты FIX-KD-11 обеспечивают более функциональный образец ходьбы при повседневных занятиях. Это отличное изделие, помогающее при обучении ходьбе у детей с неврологическими расстройствами, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП). Показания • Детский церебральный паралич (ДЦП) • Расщепление позвоночника • Расстройства проприоцепции • Мышечная гипотония • Другие неврологические расстройства детского периода Технические характеристики					
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии

40 — 44 см	44,5 — 51 см	51,5 — 59 см	59,5 — 67 см	67,5 — 72 см	72,5 — 77 см
Внутренняя длина штанины	Внутренняя длина штанины	Внутренняя длина штанины	Внутренняя длина штанины	Внутренняя длина штанины	Внутренняя длина штанины
10 см	11 см	14 см	14 см	15 см	17 см
Общая длина изделия	Общая длина изделия	Общая длина изделия	Общая длина изделия	Общая длина изделия	Общая длина изделия
30 см	32 см	37 см	37 см	40 см	41 см
Подходит для возраста	Подходит для возраста	Подходит для возраста	Подходит для возраста	Подходит для возраста	Подходит для возраста
1 — 2 лет	2 — 3 лет	3 — 6 лет	5 — 9 лет	9 — 12 лет	12 + лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-11, Размер 1	Д x Ш x Г (30 см, 23 см, 3 см), Масса 0,217 кг
FIX-KD-11, Размер 2	Д x Ш x Г (32 см, 25 см, 3 см), Масса 0,234 кг
FIX-KD-11, Размер 3	Д x Ш x Г (37 см, 27 см, 3 см), Масса 0,252 кг
FIX-KD-11, Размер 4	Д x Ш x Г (37 см, 29 см, 3 см), Масса 0,271 кг
FIX-KD-11, Размер 5	Д x Ш x Г (37 см, 31 см, 3 см), Масса 0,291 кг
FIX-KD-11, Размер 6	Д x Ш x Г (41 см, 33 см, 3 см), Масса 0,311 кг

FIX-KD-19	
Общее описание Ортез бедра FIX-KD-19 изготовлен из тонкого цветного неопрена, который поддерживает постоянное сжатие сустава. В ортезе используется профилированная боковая шина, оснащенная механизмом, обеспечивающим плавную регулировку диапазона движения каждые 15°. Шина разгружает напряженный бедренный сустав, а также способствует работе конечности по оси. Предотвращает излишнее вращение, отведение или приведение сустава. Кроме того, возможность регулирования диапазона движения сустава позволяет плавно контролировать активность сустава, а также, в случае необходимости, полностью обездвижить сустав. Детский ортез FIX-KD-19	

изготовлен из очень нежного неопрена, из-за которого изделие очень легкое. Постоянная компрессия бедренного сустава уменьшает болевые ощущения и снижает воспалительный процесс. Кроме того, неопрен устойчив к воде, поэтому он водоотпорный, и ребенок может выполнять гигиенические действия вместе с ортезом. Систематичное использование ортеза позволяет снять тяжесть в области бедренного сустава при воспалительных процессах, как вследствие болезни, так и травм. Ортез успешно заменит традиционные гипсовые повязки, кроме того, он на много легче и определенно комфортнее. Показания • Юношеский ревматоидный артрит • Болезнь Пертеса (асептический некроз костей) • деформация бедренного сустава • вывих (дислокация) бедренного сустава • переломы бедренной кости • повреждения суставной вертлужной губы • дегенеративные изменения бедренного сустава Технические характеристики Общая длина изделия: • 1: 28 см • 2: 37 см	
Размер 1 Обхват в поясе мин 40 – макс 60 см Обхват бедра мин 25 — макс 35 см Подходит для возраста 2 — 9 лет	Размер 2 Обхват в поясе мин 45 – макс 70 см Обхват бедра мин 30 — макс 40 см Подходит для возраста 8 — 12 лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KD-19, Размер 1	Д x Ш x Г (28 см, 28,5 см, 2 см), Масса 0,345 кг
FIX-KD-19, Размер 2	Д x Ш x Г (38 см, 34 см, 2 см), Масса 0,410 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-26

Общее описание

Универсальная паховая повязка предотвращает распространенные травмы бедер, регулируемое сжатие, сохраняет мышцы в тепле, поддерживает постоянную температуру и облегчает заживление. Ортез имеет открытую конструкцию с застежкой на липучке, что облегчает ее установку. Постоянное, легко регулируемое сжатие обеспечивает правильное кровообращение и насыщение кислородом мышц бедра. Дополнительный специальный незластичный элемент может быть прикреплен в паховой области по мере необходимости для поддержки введения аддуктора, уменьшая риск мышечного напряжения или разрыва.



Показания

- Напряжение аддуктора / деформация паха
- Напряжение четырехглавой мышцы бедра
- Ушиб мышц бедра
- Напряжение мышц бедра
- Триггерная точка в области бедра
- Аульсия мышечных тканей
- Плохой кровоток.

Технические характеристики

Размер универсальный

Окружность бедра на уровне паха - мин 40 см – макс 80 см

Габаритные размеры и масса

OKD-26, Размер универсальный

Д x Ш x Г (20 см, 30 см, 2 см), Масса 0,25 кг

AM-SB/IRE

Общее описание

Ортез обездвиживает тазобедренный сустав, снабжен бедренной корзиной, бедренной повязкой, одноосной боковой шиной с регулируемым углом сгибания и разгибания каждые 15 градусов. Ортез отличается превосходной поддержкой и разгрузкой тазобедренного сустава, обеспечивает над ним послеоперационный контроль. Ортез обеспечивает правильное положение бедра вовремя вертикализации и учения ходьбе, предотвращает и способствует лечению контрактуры (сокращений). Также он позволяет контролировать диапазон движений сгибания в тазобедренном суставе.

Показания

- в период раннего восстановления и во время учения ходьбе у лиц после операционного лечения тазобедренного сустава,
- в период восстановления у больных с контрактурой тазобедренного сустава неврологического и ортопедического отделов

Технические характеристики

Максимальный масса пользователя до 75 кг.



Размер универсальный

Обхват в поясе - 75 — 125 см

Габаритные размеры и масса

AM-SB/1RE, Размер универсальный

Д x Ш x Г (30 см, 59 см, 8 см), Масса 0,791 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-SB/2R**Общее описание**

Хорошо подходит для борьбы с болями в тазобедренном суставе, профилактики, лечения и послеоперационной реабилитации наш ортез с функцией термотерапии, имеющий разогревающее-охлаждающий гель. Ортез имеет анатомическую форму. Состоит из эластичных поясов на таз и бедро с застежками на липучках, которые облегчают подгонку изделия к телу пациента. Изнутри имеются карманы для двух пакетов с разогревающее-охлаждающим гелем предназначенных для термотерапии, хорошо разгружает сустав, уменьшает боль и опухлость. Ортез очень универсальный, легкий в использовании, приятный к коже, не бросается в глаза.

Показания

- Дегенеративные изменения тазобедренного сустава
- Воспаление мышц и других мягких тканей в области бедра
- Перегрузки тазобедренного сустава

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка
80-90 см	90-100 см	100-110 см	110-120 см

Габаритные размеры и масса

AM-SB/2R, Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 48 см, 8 см), Масса 0,641 кг
AM-SB/2R, Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 53 см, 8 см), Масса 0,712 кг
AM-SB/2R, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 59 см, 8 см), Масса 0,791 кг
AM-SB/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 65 см, 8 см), Масса 0,870 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

AM-SB-01	
Общее описание Орtez тазобедренного сустава с боковой шиной Am-sb-01 – ортопедическое приспособление, позволяющее снизить нагрузку с тазобедренного сустава, а также фиксировать данную область в анатомически правильном положении. Особенность данной модели – съемная подвижная шина из алюминия. Конструкция шины состоит из двух частей, скрепленных между собой шарниром, что позволяет в щадящем режиме массати нормальный образ жизни – ходить, вставать и садиться и т.д. Металл защищен от воздействия влаги порошковым покрытием. Шина установлена в специальном кармане, из которого, при необходимости ее можно легко достать и использовать ортез в менее жестком режиме. Данный ортез является универсальным - на левую и правую ногу и выпускается в четырех размерах. Конструкция изделия позволяет оптимально подогнать необходимый объем используя фиксирующие элементы на липучках. Показания • Процесс реабилитации после эндопротезирования – достаточно ограничивает подвижность сустава и предотвращает смещение или повреждение эндопротеза. • Разрушение тазобедренного сустава в связи с коксартрозом – снижает болевой синдром и ускоряет процесс восстановления	

• Вывих бедра и нестабильность сустава • Остеоартроз			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка
80-90 см	90-100 см	100-110 см	110-120 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SB-01, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 22,5 см, 9 см), Масса 0,403 кг
АМ-SB-01, Размер M	Д x Ш x Г (38,5 см, 25 см, 9 см), Масса 0,448 кг
АМ-SB-01, Размер L	Д x Ш x Г (43 см, 28 см, 9 см), Масса 0,498 кг
АМ-SB-01, Размер XL	Д x Ш x Г (47 см, 31 см, 9 см), Масса 0,548 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

АМ-SB-02					
Общее описание Изделия АМ-SB-02 было изготовлено из мягкого и эластичного сырья. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, ортез оказывает обезболивающее действие, уменьшает отечность и облегчает всасывание экссудатов и гематомы после перенесенных травм. Снимает жалобы на боль в мышцах бедра, вызванные перегрузкой и необходимыми травмами. Позволяет быстрее вернуться к тренировкам.					
Показания • при мышечных болевых синдромах • при отеках бедра, вызванных травмами или перегрузками (чрезмерными тренировками или тяжелым физическим трудом). • Профилактически используется в спорте.					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха
48-52 см	52,5-56 см	56,5-60 см	60,5-64 см	64,5-68 см	68,5-72 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SB-02, Размер S	Д x Ш x Г (36,5 см, 21,5 см, 6 см), Масса 0,530 кг
АМ-SB-02, Размер M	Д x Ш x Г (39 см, 23 см, 6 см), Масса 0,570 кг
АМ-SB-02, Размер L	Д x Ш x Г (42 см, 25 см, 6 см), Масса 0,613 кг
АМ-SB-02, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 26,5 см, 6 см), Масса 0,656 кг
АМ-SB-02, Размер XXL	Д x Ш x Г (48 см, 28,5 см, 6 см), Масса 0,702 кг
АМ-SB-02, Размер XXXL	Д x Ш x Г (51,5 см, 30,5 см, 6 см), Масса 0,751 кг

АМ-SB-03

Общее описание

Хорошо подходит для борьбы с болями в тазобедренном суставе, профилактики, лечения и послеоперационной реабилитации. Ортез выполнен из эластичного материала, стабилизирующего сустав, и улучшающего координацию мышц. Улучшает их восприятие после операции, а компрессия бандажа помогает после операции эндо протезирования тазобедренного сустава уменьшить риск образования гематомы. Конструкция ортеза имеет функцию легкого отведения тазобедренного сустава.

Показания

- Дегенеративные изменения тазобедренного сустава
- Воспаление мышц и других мягких тканей в области бедра
- Перегрузки тазобедренного сустава

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка	Обхват 5 см ниже пупка
80-90 см	90-100 см	100-110 см	110-120 см



Габаритные размеры и масса

АМ-SB-02, Размер S	Д x Ш x Г (36,5 см, 21,5 см, 6 см), Масса 0,530 кг
АМ-SB-02, Размер M	Д x Ш x Г (39 см, 23 см, 6 см), Масса 0,570 кг

АМ-SB-02, Размер L	Д x Ш x Г (42 см, 25 см, 6 см), Масса 0,613 кг
АМ-SB-02, Размер XL	Д x Ш x Г (45 см, 26,5 см, 6 см), Масса 0,656 кг

АМ-SB-05	
Общее описание Это универсальный ортез бедренного сустава с регулировкой угла сгибания сустава и отведения нижней конечности. Ортез сделан по принципу MiniMax (максимальный эффект при минимуме изделия) и благодаря такой конструкции обеспечивает максимальную безопасность и защиту при этом имеет небольшие размеры. Ортез позволяет контролировать диапазон движения сгибания/разгибания, а также отведения/приведения тазобедренного сустава. Указания и правила применения определяет лечащий врач. Показания 1. После операции по эндопротезированию тазобедренного сустава 2. Вывих и риск вывиха тазобедренного сустава 3. Дисплазия тазобедренного сустава (передняя / задняя) 4. Остеоартрит 5. Коксартроз тазобедренного сустава 6. Нестабильность тазобедренного сустава 7. После операций тазобедренного сустава 8. Необходимость иммобилизации бедра 9. Мышечные контрактуры в области тазобедренного сустава Технические характеристики Размер универсальный Обхват в поясе - мин. 75 — макс. 125 см Обхват бедра 5 см ниже паха - мин 40 см — макс 70 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-SB-05, Размер универсальный	Д x Ш x Г (29 см, 61 см, 8 см), Масса 0,998 кг
--------------------------------	--

АМ-SB-06	
Общее описание Ортез АМ-SB-06 имеет открытую конструкцию, что значительно облегчает ее наложение и подгонку к анатомии пациента. В области пояса и ноги есть застежки на липучках-велкро. А в боковой части имеются 3 ортопедические планшеты, стабилизирующие тазобедренный сустав. Они плоские,	

не выступают из изделия и не ограничивают движений. Ортез имеет перекрестные ремни из прочной ортопедической резины, которые имеют такие функции:

- отведение тазобедренного сустава
- частичное ограничение сгибания и разгибания
- предотвращение чрезмерного приведения сустава
- поддержка нужного угла внутренней/внешней ротации сустава
- защита мышц от растяжения

Благодаря своей функциональности универсальный спортивный ортез бедра AM-SB-06 является прекрасной поддержкой для всех, кому необходима защита тазобедренного сустава во время физической активности.

Показания

- артроз / остеоартрит бедра
- растяжение / разрыв мышц тазобедренного сустава
- синдром илотибиального тракта (ITBS)
- воспаление мягких тканей (сухожилия, бursy)
- повреждение хряща и связок сустава
- после операции на бедре
- профилактически в спорте

Технические характеристики

Размер универсальный: Обхват в поясе 5 см ниже пупка - мин 80 см — макс 120 см
X-Size: Обхват в поясе 5 см ниже пупка - мин 120,5 см – макс 160 см



Габаритные размеры и масса

AM-SB-06, Размер универсальный	Д x Ш x Г (43 см, 29 см, 3 см), Масса 0,481 кг
--------------------------------	--

R4M-U

Общее описание

Ортез был выполнен бесшовной техникой, он снимает жалобы на боль в мышцах бедра, вызванные перегрузкой и перенесенными травмами. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, он оказывает эффект уменьшения отечности и облегчает всасывание экссудатов и гематом после перенесенных травм. Позволяет быстрее вернуться к профессиональной работе или тренировкам. Показания и правила применения определяет лечащий врач.

Показания

- при болевых синдромах мышц бедра, вызванных травмами или перегрузками (чрезмерная тренировка или тяжелая физическая работа)
- при отеках бедра, вызванных перенесенными травмами или перегрузками



- профилактически используется в спорте, вызывающем значительную перегрузку мышц бедра.			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра
40,5-46 см	46-51 см	51-56 см	56-63,5 см

Габаритные размеры и масса

R4M-U, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 14 см, 1 см), Масса 0,047 кг
R4M-U, Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 15,5 см, 1 см), Масса 0,052 кг
R4M-U, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 17 см, 1 см), Масса 0,057 кг
R4M-U, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 18,5 см, 1 см), Масса 0,062 кг

R4M-U-01			
Общее описание Снимает жалобы на боль в мышцах бедра, вызванные перегрузкой и перенесенными травмами. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, он оказывает эффект уменьшения отечности и облегчает всасывание экссудатов и гематом после перенесенных травм. Позволяет быстрее вернуться к профессиональной работе или тренировкам. В качестве основного волокна используется полиэстер. Там, где это абсолютно необходимо, полиэстер также поставляется в сочетании с эластаном для повышения эластичности изделия и лучшей подгонки к суставу. Показания и правила применения определяет лечащий врач. Показания • При болевых синдромах мышц бедра, особенно вызванных травмами или перегрузками (чрезмерная тренировка или тяжелая физическая работа) • При отеках бедра, вызванных перенесенными травмами или перегрузками • Профилактически используется в спорте, вызывающем значительные перегрузки мышц бедра. Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра
40,5-46 см	46-51 см	51-56 см	56-63,5 см

Габаритные размеры и масса

R4M-U-01, Размер S	Д x Ш x Г (19 см, 14 см, 1 см), Масса 0,051 кг
R4M-U-01, Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 15,5 см, 1 см), Масса 0,062 кг
R4M-U-01, Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 17 см, 1 см), Масса 0,067 кг
R4M-U-01, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 18,5 см, 1 см), Масса 0,073 кг

AS-U					
Общее описание Анатомический ортез бедра AS-U-идеальный выбор для тех, кто ищет правильное сжатие в сочетании с умеренным нагревом области мышц бедра во время тренировки, с дополнительной защитой от ссадин и травм. Ортез был создан специально для спортсменов-профессионалов и особенно активных людей, для которых самые высокие стандарты функциональности, подгонки, прочности и комфорта стоят на первом месте. Ортез AS-U дополнительно оказывает сильное компрессионное действие, благодаря чему уменьшает возможные экссудаты в бедре, устраняет отеки и оказывает обезболивающее действие. Он стабилизирует и нагревает нижнюю конечность, улучшая клеточный метаболизм и уменьшая воспаление мышц и сухожилий. Анатомическая форма ортеза позволяет использовать ее как на правой, так и на левой ноге. Высокое качество ортеза бедра и паха защитит ногу от травмы во время ваших тренировок. Показания - перегрузка мышц и сухожилий - воспаление (тендинопатия) - боль в области паха и бедра Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха	Обхват бедра на 5 см ниже паха
48-52 см	52,5-56 см	56,5-60 см	60,5-64 см	64,5-68 см	68,5-72 см

Габаритные размеры и масса

AS-U, Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 19 см, 3 см), Масса 0,131 кг
AS-U, Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 20,5 см, 3 см), Масса 0,140 кг
AS-U, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 22 см, 3 см), Масса 0,151 кг
AS-U, Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 23,5 см, 3 см), Масса 0,162 кг
AS-U, Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 25 см, 3 см), Масса 0,173 кг
AS-U, Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 27 см, 3 см), Масса 0,185 кг

ТВ-06

Общее описание

Дробленый лед, помещенный в специальный мешок, обеспечивает эффективную терапию холодом, устраняя болевые ощущения и уменьшая воспаление. Открытая неопреновая конструкция ортезов, специальный карман и наш авторский клапан для отвода воздуха обеспечивают идеальное прилегание мешка со льдом до тазобедренных суставов, пояснично-крестцовых или спине, окутывая их низкой температурой и создавая тем самым мгновенную „холодную повязку”. Благодаря своей универсальной форме ортез ТВ-06 отлично охлаждает тазобедренные, пояснично-крестцовые суставы и выбранную часть позвоночника.

Показания

Предназначение: артроз/нестабильность сустава крестцово-тазобедренного сустава, боли в мышцах и тендопении в области таза, дегенеративные изменения тазобедренного сустава (coxartroza), воспаление мышц и мягких тканей в области бедра, перегрузка тазобедренного сустава, острые болевые синдромы/остеохондроз в пояснично-крестцовом отделе, перегрузки пояснично-крестцового отдела, растяжение/перегрузки мышц позвоночника.

Технические характеристики

Размер универсальный



Габаритные размеры и масса

ТВ-06, Размер универсальный	Д x Ш x Г (28 см, 22 см, 9 см), Масса 0,442 кг
-----------------------------	--

U-U

Общее описание

Бедренный бандаж U-и – это практичное и универсальное средство профилактики и лечения болевого синдрома в мышцах бедра. Благодаря своей безразмерной конструкции, изделие легко подгоняется под любой объем и адаптируется под индивидуальные потребности. Смягчает болевые симптомы мышц бедра, вызванные перегрузкой и травмами. Благодаря удержанию постоянной температуры и эластичному сжатию, обладает противоотечным действием и облегчает впитывание жидкости и экссудатов после перенесенных травм. Делает возможным более быстрое восстановление работоспособности и возвращение к тренировкам. Показания и применение определяет лечащий врач.

Показания

- при болях мышц бедра, вызванных травмами или перегрузками (надмерные тренировки или тяжелая физическая нагрузка)
- при опухолях бедра, вызванных травмами или перегрузками
- профилактически при занятиях спортом, приводящим к перегрузке бедра, выполняет защитную функцию в контактных видах спорта

Технические характеристики

Размер универсальный: Обхват бедра 5 см ниже паха - мин 40 см — макс 68 см



Габаритные размеры и масса

U-U, Размер универсальный

Д x Ш x Г (28 см, 23 см, 2 см), Масса 0,223 кг

AM-SB/1RE DUAL

Общее описание

Бедренный пояс имеет анатомическую конструкцию и регулировку обхвата, что позволяет подогнать его к любому пациенту. По бокам пояса есть пластиковые пелоты к которым крепятся ортопедические шины и два комплекта прочных ремней с регулировкой длины. Кроме того, есть 2 повязки на бедра с пелотами для шин и двойными обхватывающими ремнями с регулировкой длины. Ортез имеет 2 моноцентрические боковые шины с регулировкой разгибания с шагов в 15° кроме того шины имеют регулировку длины.

Показания

- дисплазия тазобедренных суставов,
- дислокации тазобедренных суставов,



• дегенерация тазобедренных суставов, • коксартроз, • при ранней реабилитации и обучении ходьбе у больных после операции на тазобедренном суставе • в реабилитации больных с мышечными контрактурами тазобедренного сустава по неврологическим или ортопедическим причинам Технические характеристики Максимальный масса пользователя до 75 кг. Размер универсальный: Обхват в поясе - мин 75 — макс 125 см	
---	--

Габаритные размеры и масса

AM-SB/IRE DUAL, Размер универсальный	Д x Ш x Г 5 элементов 1) 65,5 × 28,5 × 6,0 см 2) 66,1 × 28,4 × 5,8 см 3) 58,45 × 28,65 × 5,8 см 4) 34,3 × 27,5 × 9,5 см 5) 34,0 × 27,5 × 8,7 см, Масса 3,018 кг
---	--

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-ADS-R	
Общее описание Деротационный аппарат для установки стопы в промежуточном положении, а также для препятствования вращениям бедренного сустава. Ортез оснащен основой, выполненной из высококачественного алюминиевого сплава, покрытого горячим методом прочной порошковой оболочкой. Стопа и нижняя конечность поддерживается стабилизирующими лентами. В передней части аппарата установлен деротационный треугольник, которым можно настроить положение стопы при внешнем или внутреннем вращении нижней конечности. Кроме защиты нижней конечности от вращения, существует возможность настройки подошвенного сгибания стопы благодаря регуляторам на боковых панелях. Показания - при параличе и парезе нижних конечностей	

- после ортопедических операций на нижних конечностях - в начальный восстановительный период - после травм нижних конечностей в период выздоровления - у пациентов при долгосрочном лечении - после замены тазобедренного сустава Технические характеристики	
Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

AM-ADS-R, Размер универсальный	Д x Ш x Г (42 см, 16 см, 27 см), Масса 1,448 кг
---------------------------------------	---

AM-ADS-R (детский)	
Общее описание Детский деротационный аппарат бедра AM-ADS-R предназначен для иммобилизации конечности и удержания бедра в желаемой позиции. Такое решение помогает бороться с контрактурами и разгружать суставные поверхности бедра, колена и голеностопного сустава. Ортез бедра AM-ADS-R состоит из трех элементов: стойки с регулируемым диапазоном вращения, стельки из пены и стабилизирующих ремней. Рама очень стабильна, поэтому обеспечивает отличную стабилизацию и иммобилизацию нижней конечности. На треугольной основе размещена шкала, которая позволяет установить желаемый терапевтический угол вращения. Он охватывает диапазон от 0 до 45° как для внутреннего, так и для внешнего вращения. Показания • позвоночная трещина • спондилез • другой перегрузочный перелом в области позвоночника • воспаление суставов позвоночника • повреждение мышц спины и парапроктивных мышц • ушибы, растяжения поясничного отдела позвоночника Технические характеристики	
Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

AM-ADS-R (детский), Размер универсальный	Д x Ш x Г (41 см, 17 см, 26 см), Масса 1,385 кг
--	---

PCO-L-10											
Общее описание Компрессионный ортез бедра PCO-L-10 улучшает стабилизацию и контроль поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижней части тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Ортез помогает при ходьбе, удерживании равновесия и стабилизации нижней конечности, повышает проприоцепцию тела, главным образом области бедра, и обеспечивает ребенку глубокую чувствительность конечности. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта. Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер 1</th><th>Размер 2</th><th>Размер 3</th></tr> <tr> <td>Окружность бедра</td><td>Окружность бедра</td><td>Окружность бедра</td></tr> <tr> <td>20,5-26 см</td><td>26-31 см</td><td>31-36 см</td></tr> </table>			Размер 1	Размер 2	Размер 3	Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра	20,5-26 см	26-31 см	31-36 см
Размер 1	Размер 2	Размер 3									
Окружность бедра	Окружность бедра	Окружность бедра									
20,5-26 см	26-31 см	31-36 см									
											

Габаритные размеры и масса

PCO-L-10, Размер 1	Д x Ш x Г (11 см, 16 см, 1 см), Масса 0,22 кг
PCO-L-10, Размер 2	Д x Ш x Г (16 см, 20 см, 1 см), Масса 0,25 кг
PCO-L-10, Размер 3	Д x Ш x Г (20 см, 23 см, 1 см), Масса 0,28 кг

PCO-L-03											
Общее описание Короткий компрессионный ортез бедер и нижних конечностей PCO-L-03 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижних частей тела, главным образом таза, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Короткий компрессионный ортез бедер и нижних конечностей PCO-L-03 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта. • Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер 1</th><th>Размер 2</th><th>Размер 3</th></tr> <tr> <td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td></tr> <tr> <td>40 — 44 см</td><td>44,5 — 51 см</td><td>51,5 — 59 см</td></tr> </table>			Размер 1	Размер 2	Размер 3	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	40 — 44 см	44,5 — 51 см	51,5 — 59 см
Размер 1	Размер 2	Размер 3									
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии									
40 — 44 см	44,5 — 51 см	51,5 — 59 см									
											

Габаритные размеры и масса

PCO-L-03, Размер 1	Д x Ш x Г (37 см, 28 см, 1 см), Масса 0,1 кг
PCO-L-03, Размер 2	Д x Ш x Г (46 см, 32 см, 1 см), Масса 0,107 кг
PCO-L-03, Размер 3	Д x Ш x Г (53 см, 36 см, 1 см), Масса 0,12 кг

OKD-10			
Общее описание Компактный и практичный ортез представляет собой поясной ремень, который является несущей частью конструкции, динамической системы поддержки колена и подколенной подвязки, которая фиксирует конструкцию в нижней части. Конструкция пояса позволяет подогнать объем и фиксируется с помощью застежки – замка, выполненной из прочного пластика. Динамическая система представляет собой прочный ремень, соединяющий пояс с коленным модулем. Нижняя часть ремня имеет высокую степень эластичности, что позволяет возвращать колено и бедро в исходное положение. Подвязка под коленную чашечку стабилизирует сустав и поддерживает всю конструкцию. Показания • неврологические расстройства • ревматологические заболевания • состояния после травмы • врожденные дефекты Технические характеристики Обхват в поясе универсальный - мин 60 см — макс 145 см			
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват под коленом	Обхват под коленом	Обхват под коленом	Обхват под коленом
28-33 см	33-38 см	38-43 см	43-48 см

Габаритные размеры и масса

Д x Ш x Г (20 см, 6 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,385 кг	Д x Ш x Г (20 см, 6 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,385 кг
Д x Ш x Г (25 см, 7 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,397 кг	Д x Ш x Г (25 см, 7 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,397 кг
Д x Ш x Г (27 см, 8 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,400 кг	Д x Ш x Г (27 см, 8 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,400 кг
Д x Ш x Г (31 см, 9 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,405 кг	Д x Ш x Г (31 см, 9 см, 7 см) + (21,5 × 23,5 × 5 см), Масса 0,405 кг

OKD-13

Общее описание

Модель OKD-13 предназначена для инвалидов, которые передвигаются на коляске. Неподвижность нижних конечностей при пересаживании создает значительное неудобство. Данное изделие служит вспомогательным инструментом для облегчения пересаживания из/в инвалидную коляску. Конструкция изделия очень проста и практична, что позволяет использовать ортез круглосуточно. Основной несущий ремень фиксируется тремя текстильными кольцами в областях голени, колена и бедра. С помощью ремня поднимается и переставляется нижняя конечность. Использовать ремень, люди с ограниченной ответственностью могут как захватом кисти, так и используя предплечье.

**Показания**

Модель OKD-13 предназначена для инвалидов, которые передвигаются на коляске.

Технические характеристики

Размер универсальный на правую и левую конечность
Обхват бедра - мин 45 см — макс 80 см

Габаритные размеры и масса

OKD-13, Размер универсальный

Д x Ш x Г (22 см, 10 см, 5 см), Масса 0,095 кг

OKD-14**Общее описание**

Ортез OKD-14 характеризуется прекрасной поддержкой и разгрузкой коленного и тазобедренного сустава, и их послеоперационным контролем. Ортез обеспечивает правильное положение бедра вовремя вертикализации и обучения ходьбе, а также контроль изгибания коленного сустава, предохраняет и облегчает лечение контрактур. Позволяет контролировать диапазон движения в суставах. Стабилизирует и разгружает тазобедренный и коленный сустав, позволяет постепенно увеличивать диапазон подвижности в этих суставах, легко подгоняется к телу пациента. Стандартно ортез односторонний, но можно изготовить ортез и для двух конечностей на заказ.

Показания

Односторонний ортез можно применять в случае:

- тяжелой нестабильности или остеоартрита колена,
- паралича нижних конечностей — в вертикальном



положении и при обучении ходить пациентов с неврологическими и ортопедическими заболеваниями, • необходимость иммобилизации и при реабилитации больных после серьезной операции на колене по причине травмы (внутрисуставных переломов, реконструкция крестообразных связок) и болезни (частичная или полная замена коленного сустава), • профилактики и лечения контрактуры бедра и колена, вызванного парезом или дегенеративными изменениями, • необходимости правильного положения бедра вовремя вертикализации и обучению ходьбе. Технические характеристики		
Обхват в поясе универсальный - мин 75 см — макс 125 см		
Размер S Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 55 см Расстояние от колена до паха 27 см — 37 см	Размер M Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 55 см Расстояние от колена до паха 33 см — 43 см	Размер L Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 55 см Расстояние от колена до паха 36 см — 46 см

Габаритные размеры и масса

OKD-14, Размер S	Д x Ш x Г (26,5 см, 67 см, 11 см), Масса 1,538 кг
OKD-14, Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 67 см, 11 см), Масса 1,619 кг
OKD-14, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 67 см, 11 см), Масса 1,704 кг

С шиной 2R:

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

С шиной 1RE:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

COMPLEX/2R

Общее описание

Ортез нижней конечности Hkafo на таз, бедро, голень и стопу Reh4Mat Complex/R2 – сложная ортопедическая конструкция для стабилизации нижней конечности в целом. Благодаря модульной структуре, ортез можно использовать длительно – на всем периоде реабилитации, постепенно удаляя из конструкции тот или иной элемент. Конструкция включает в себя жесткие элементы – ортопедические шины, которые регулируются по длине. Шины изготовлены из прочных и легких сплавов дюралюминия и стали, имеют защитное покрытие от агрессивного воздействия влаги.

Показания

В комплектации на одну конечность при:

- тяжелой нестабильности или дегенерации коленного сустава с парезом ног (пояснично-крестцовый радикулит, полиомиелит — болезнь Гейне-Медина)
- тетрапарез — реабилитация в вертикальном положении, вовремя обучение ходьбе
- для иммобилизации в процессе реабилитации после операций на колене или заболеваний
- профилактика и лечения контрактуры тазобедренного, коленного и голеностопного сустава из-за паралича или дегенеративных изменений
- необходимость правильного положения бедра вовремя вертикализации и обучения ходьбе

Технические характеристики

Изделие есть на левую / правую конечность.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМБИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ ИЗ ТАБЛИЦ 3 И 4

Максимальный масса пользователя до 75 кг.

Обхват в поясе универсальный - мин 75 см — макс 125 см

Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 см — макс 75 см

Обхват голени в 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 см — макс 55 см

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха
27-37 см	33-43 см	36-46 см	36-46 см
Расстояние от колена до внешнего края	Расстояние от колена до внешнего края	Расстояние от колена до внешнего края	Расстояние от колена до внешнего края



стопы 34-45 см	стопы 40-51 см	стопы 42-54 см	стопы 49-61 см
Размер S Длина стопы 22-23,5 см	Размер M Длина стопы 24-25,5 см	Размер L Длина стопы 26-27,5 см	Размер XL Длина стопы 28-29,5 см

Габаритные размеры и масса

COMPLEX/2R, Размер S	Д x Ш x Г (53 см, 26 см, 8 см), Масса 1,289 кг
COMPLEX/2R, Размер M	Д x Ш x Г (56 см, 28 см, 8 см), Масса 1,386 кг
COMPLEX/2R, Размер L	Д x Ш x Г (59 см, 30 см, 8 см), Масса 1,490 кг
COMPLEX/2R, Размер XL	Д x Ш x Г (62 см, 32 см, 8 см), Масса 1,594 кг

С шиной 2R:

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

С шиной 1RE:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

COMPLEX/2R DUAL

Общее описание

Ортез нижней конечности Нкафо на таз, бедро, голень и стопу Reh4Mat COMPLEX/2R DUAL – сложная ортопедическая конструкция для стабилизации нижней конечности в целом. Благодаря модульной структуре, ортез можно использовать длительно – на всем периоде реабилитации, постепенно удаляя из конструкции тот или иной элемент. Конструкция включает в себя жесткие элементы – ортопедические шины, которые регулируются по длине. Шины изготовлены из прочных и легких сплавов дюралюминия и стали, имеют защитное покрытие от агрессивного воздействия влаги.

Показания

В комплектации на две ноги ортез можно применять при таких заболеваниях:

- вялый парализ
- миеломенингоцеле
- спинальная мышечная атрофия
- мышечная дистрофия / миодистрофия при сохраненной мобильности верхних конечностей

Технические характеристики

Изделие есть на левую / правую конечность.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМБИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ ИЗ ТАБЛИЦ 3 И 4

Максимальный масса пользователя до 75 кг.



Обхват в поясе универсальный - мин 75 см — макс 125 см

Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 см — макс 75 см

Обхват голени в 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 см — макс 55 см

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха
27-37 см	33-43 см	36-46 см	36-46 см
Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы
34-45 см	40-51 см	42-54 см	49-61 см
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Длина стопы	Длина стопы	Длина стопы	Длина стопы
22-23,5 см	24-25,5 см	26-27,5 см	28-29,5 см

Габаритные размеры и масса

COMPLEX/2R DUAL, Размер S	Д x Ш x Г (47 см, 34,5 см, 15 см), Масса 2,872 кг
COMPLEX/2R DUAL, Размер M	Д x Ш x Г (49,5 см, 37 см, 15 см), Масса 3,089 кг
COMPLEX/2R DUAL, Размер L	Д x Ш x Г (52 см, 40 см, 15 см), Масса 3,321 кг
COMPLEX/2R DUAL, Размер XL	Д x Ш x Г (54,5 см, 43 см, 15 см), Масса 3,553 кг

С шиной 2R:

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

С шиной 1RE:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

OKD-14 DUAL

Общее описание

Модель состоит из трех модулей, соединенных между собой шарнирами с пошаговой регулировкой угла сгибания и защитным механизмом от случайных изменений. При необходимости можно демонтировать те или иные части конструкции. Особенностью данной модели является возможность поддержки обеих конечностей. В стандартном выполнении стабилизируется одна конечность (левая или правая). Аппарат имеет 6 обводящих ремней, а шины имеют шарниры 2R или 1RE. Полицентрический шарнир 2R имеет регулировку подвижности сустава в границах каждые 20 градусов, а шарнир 1RE — каждые 15 градусов. Каждый из этих шарниров может быть заблокирован на нужном угле изгиба, и предохранитель установленного угла от случайного или несанкционированного изменения.

Показания

В двухсторонней версии можно применять при:

- вялый парализ, парез,
- миеломенингоцеле,
- спинальная мышечная атрофия,
- мышечная дистрофия с сохраненной функцией верхней конечности, можно использовать для целей поддержки.



Технические характеристики		
Изделие есть на левую и на правую конечность.		
Максимальный масса пользователя до 75 кг.		
Обхват в поясе универсальный - мин 75 см — макс 125 см		
Размер S Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 55 см Расстояние от колена до паха 27 см — 37 см	Размер M Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 55 см Расстояние от колена до паха 33 см — 43 см	Размер L Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 40 см — макс 75 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 30 см — макс 55 см Расстояние от колена до паха 36 см — 46 см

Габаритные размеры и масса

OKD-14 DUAL, Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 35 см, 15 см), Масса 2,223 кг
OKD-14 DUAL, Размер M	Д x Ш x Г (49 см, 35 см, 15 см), Масса 2,390 кг
OKD-14 DUAL, Размер L	Д x Ш x Г (53 см, 35 см, 15 см), Масса 2,570 кг

С шиной 2R:

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

С шиной 1RE:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

PCO-L-01	
Общее описание Длинный компрессионный ортез бедер и нижних конечностей PCO-L-01 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижних частей тела, в том числе голеностопного сустава, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Длинный компрессионный ортез нижних конечностей PCO-L-01 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит	

достичь определенно лучших терапевтических результатов.

Показания

- детский церебральный паралич (ДЦП)
- расщепление позвоночника
- синдром Дауна
- расстройство сенсорной интеграции (СИ)
- повышенный мышечный тонус (пмт)
- ослабленный мышечный тонус (омт)
- спастичность
- атетоз
- атаксия
- дискинезия
- дистония
- аутизм
- синдром Ретта

Технические характеристики



Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки
мин 20 см — макс 26 см	мин 27 см — макс 33 см	мин 34 см — макс 40 см
Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки	Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки	Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 15 см — макс 20 см	мин 21 см — макс 25 см	мин 26 см — макс 30 см
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха
14 см — 19 см	17 см — 22 см	20 см — 25 см

Габаритные размеры и масса

PCO-L-01, Размер 1	Д x Ш x Г (64 см, 28 см, 1 см), Масса 0,16 кг
PCO-L-01, Размер 2	Д x Ш x Г (75 см, 32 см, 1 см), Масса 0,179 кг
PCO-L-01, Размер 3	Д x Ш x Г (82 см, 36 см, 1 см), Масса 0,19 кг

PCO-L-08

Общее описание

Длинный компрессионный ортез нижней конечности PCO-L-08 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижних частей тела, в том числе голеностопного сустава, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента.

Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую и динамичную стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают непроизвольные движения ребенка. Ортез помогает при ходьбе, удерживании равновесия и стабилизации нижних конечностей.

Показания

- детский церебральный паралич (ДЦП)
- расщепление позвоночника
- синдром Дауна
- расстройство сенсорной интеграции (СИ)
- повышенный мышечный тонус (пмт)
- ослабленный мышечный тонус (омт)
- спастичность
- атетоз
- атаксия
- дискинезия
- дистония
- аутизм
- синдром Ретта

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки	Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки
мин 20 см — макс 26 см	мин 27 см — макс 33 см	мин 34 см — макс 40 см
Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки	Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки	Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки
мин 15 см — макс 20 см	мин 21 см — макс 25 см	мин 26 см — макс 30 см
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха
14 см — 19 см	17 см — 22 см	20 см — 25 см

Габаритные размеры и масса

PCO-L-08, Размер 1	Д x Ш x Г (38 см, 14 см, 1 см), Масса 0,045 кг
PCO-L-08, Размер 2	Д x Ш x Г (54 см, 17 см, 1 см), Масса 0,053 кг

PCO-L-08, Размер 3	Д x Ш x Г (61 см, 22 см, 1 см), Масса 0,061 кг
--------------------	--

PCO-L-09		
Общее описание Компрессионный ортез нижней конечности PCO-L-09 охватывает бедро, коленный сустав и голень. Ортез предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижних частей тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую и динамичную стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают непроизвольные движения ребенка. Ортез помогает при ходьбе, удерживании равновесия и стабилизации нижней конечности. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики		
Размер 1 Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 20 см — макс 26 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 15 см — макс 20 см Расстояние от колена до паха 14 см — 19 см	Размер 2 Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 27 см — макс 33 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 21 см — макс 25 см Расстояние от колена до паха 17 см — 22 см	
		Размер 3 Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 34 см — макс 40 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки мин 26 см — макс 30 см Расстояние от колена до паха 20 см — 25 см

Габаритные размеры и масса

PCO-L-09, Размер 1	Д х Ш х Г (27 см, 16 см, 1 см), Масса 0,039 кг
PCO-L-09, Размер 2	Д х Ш х Г (33 см, 20 см, 1 см), Масса 0,042 кг
PCO-L-09, Размер 3	Д х Ш х Г (36 см, 23 см, 1 см), Масса 0,046 кг

PCO-L-02		
Общее описание Компрессионный ортез бедер и нижних конечностей PCO-L-02 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу нижних частей тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую и динамичную стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка. Ортез помогает при ходьбе, удерживании равновесия и стабилизации нижних конечностей. Компрессионный ортез бедер и нижних конечностей PCO-L-02 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики		
Размер 1 Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 20 см — макс 26 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки	Размер 2 Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 27 см — макс 33 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки	
		Размер 3 Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки мин 34 см — макс 40 см Диапазон окружности голени в 15 см ниже центра коленной чашечки

мин 15 см — макс 20 см	мин 21 см — макс 25 см	мин 26 см — макс 30 см
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха
14 см — 19 см	17 см — 22 см	20 см — 25 см

Габаритные размеры и масса

PCO-L-02, Размер 1	Д x Ш x Г (53 см, 28 см, 1 см), Масса 0,13 кг
PCO-L-02, Размер 2	Д x Ш x Г (64 см, 32 см, 1 см), Масса 0,135 кг
PCO-L-02, Размер 3	Д x Ш x Г (71 см, 36 см, 1 см), Масса 0,142 кг

COMPLEX PLUS TLSO

Общее описание

Комплексная стабилизация нижних конечностей и позвоночника – сложный и длительный процесс, требующий дополнительные ортопедические инструменты, одним из которых является Ортез нижних конечностей с корсетом Hkafo+tlso Complex plus. Данная модель привлекательна модульной структурой, что позволяет использовать изделие на всем периоде реабилитации. Начиная от полной вертикальной стабилизации, и заканчивая коленным и голеностопным суставами. Полной комплектации состоит из следующих модулей:

- Грудной корсет,
- Пояс,
- Рукав голень-бедро,
- Поддержка стопы

Показания

В комплектации на одну конечность можно применять при таких заболеваниях:

- тяжелой нестабильности или дегенерации коленного сустава с парезом ног (пояснично-крестцовый радикулит, полиомиелит — болезнь Гейне-Медина)
- тетрапарез — реабилитация в вертикальном положении, вовремя обучение ходьбе
- для иммобилизации в процессе реабилитации после операций на колене или заболеваний
- профилактика и лечения контрактуры тазобедренного, коленного и голеностопного сустава из-за паралича или дегенеративных изменений
- необходимость правильного положения бедра



во время вертикализации и обучения ходьбе. Технические характеристики Изделие есть на левую / правую сторону. ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМБИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ ИЗ ТАБЛИЦ 1, 3 И 4 Максимальный масса пользователя до 75 кг.					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика
45-48 см	48,5-51 см	51,5-54 см	54,5-57 см	57,5-60 см и более	57,5-60 см и более
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см
Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 см — макс 75 см					
Обхват голени в 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 см — макс 55 см					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL		
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха		
27-37 см	33-43 см	36-46 см	36-46 см		
Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы		
34-45 см	40-51 см	42-54 см	49-61 см		
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL		
Длина стопы	Длина стопы	Длина стопы	Длина стопы		
22-23,5 см	24-25,5 см	26-27,5 см	28-29,5 см		

Габаритные размеры и масса

COMPLEX PLUS TLSO, Размер S	Д x Ш x Г (59,5 см, 22,5 см, 18 см), Масса 1,963 кг
------------------------------------	---

COMPLEX PLUS TLSO, Размер M	Д x Ш x Г (62,5 см, 24 см, 18 см), Масса 2,111 кг
COMPLEX PLUS TLSO, Размер L	Д x Ш x Г (66 см, 26 см, 18 см), Масса 2,270 кг
COMPLEX PLUS TLSO, Размер XL	Д x Ш x Г (69,5 см, 28 см, 18 см), Масса 2,429 кг
COMPLEX PLUS TLSO, Размер 2XL	Д x Ш x Г (73 см, 28 см, 18 см), Масса 2,550 кг
COMPLEX PLUS TLSO, Размер 3XL	Д x Ш x Г (76,5 см, 28 см, 18 см), Масса 2,677 кг

С шиной 2R:

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

С шиной 1RE:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

COMPLEX PLUS TLSO DUAL	
Общее описание Модель COMPLEX PLUS TLSO DUAL на всю нижнюю конечность с корсетом относится к категории стабилизирующих ортезов. Фиксация и поддержка конечности осуществляется по всем узловым точкам – тазобедренному, коленному и голеностопному суставам. В процессе использования данной модели разгружается и стабилизируется позвоночник и корректируется осанка. Сложная архитектура изделия выполняется под заказ и содержит 5 модулей: • Плечевой корсет, • Бедренный пояс, • Бедренный модуль, • Модуль на голень, • Голеностопный модуль Показания В двухсторонней конфигурации может использоваться при: • вялый парализ • миеломенингоцеле • спинальная мышечная атрофия • мышечная дистрофия / миодистрофия при сохраненной мобильности верхних конечностей Технические характеристики Изделие есть на левую / правую сторону. ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМБИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ ИЗ	

ТАБЛИЦ 1, 3 И 4					
Максимальный масса пользователя до 75 кг.					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика	Расстояние от Th3 до копчика
45-48 см	48,5-51 см	51,5-54 см	54,5-57 см	57,5-60 см и более	57,5-60 см и более
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см	мин 75 см — макс 125 см
Обхват бедра в 15 см выше центра коленной чашечки - мин 40 см — макс 75 см					
Обхват голени в 15 см ниже центра коленной чашечки - мин 30 см — макс 55 см					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL		
Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха	Расстояние от колена до паха		
27-37 см	33-43 см	36-46 см	36-46 см		
Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы	Расстояние от колена до внешнего края стопы		
34-45 см	40-51 см	42-54 см	49-61 см		
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL		
Длина стопы	Длина стопы	Длина стопы	Длина стопы		
22-23,5 см	24-25,5 см	26-27,5 см	28-29,5 см		

Габаритные размеры и масса

COMPLEX PLUS TLSO DUAL, Размер S	Д x Ш x Г (59,5 см, 22,5 см, 23 см), Масса 2,250 кг
COMPLEX PLUS TLSO DUAL, Размер M	Д x Ш x Г (62,5 см, 24 см, 23 см), Масса 2,350 кг
COMPLEX PLUS TLSO DUAL, Размер L	Д x Ш x Г (66 см, 26 см, 23 см), Масса 2,610 кг

COMPLEX PLUS TLSO DUAL, Размер XL	Д х Ш х Г (69,5 см, 28 см, 23 см), Масса 2,960 кг
COMPLEX PLUS TLSO DUAL, Размер 2XL	Д х Ш х Г (73 см, 28 см, 23 см), Масса 3,270 кг
COMPLEX PLUS TLSO DUAL, Размер 3XL	Д х Ш х Г (76,5 см, 28 см, 23 см), Масса 3,625 кг

С шиной 2R:

Регулировка угла сгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110.

Регулировка угла разгибания: 0, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130.

Шаг регулировки: 10/20 градусов.

С шиной 1RE:

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие или его основные части

Наименование изделия	Общее понятие	Материал	Марка	Страна, производитель
1. Ортез на голеностопный сустав AM-ASS-OS 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-02 6. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-08 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-03 9. Ортез на голеностопный сустав AS-U-06 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 11. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/IRE 12. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/IRE-ACL 13. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/IRE-02 14. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 15. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 16. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 17. Ортез на коленный сустав EB-P/RZ 18. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 19. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2R 20. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 21. Ортез на коленный сустав ZEUS 22. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-03 23. Ортез на коленный сустав OKD-06 24. Ортез на коленный сустав OKD-07 25. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 26. Ортез на коленный сустав SPARTAN 27. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 28. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 29. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R-01 30. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 31. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R-01 32. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 33. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R-01 34. Ортез на коленный сустав OKD-01 35. Ортез на коленный сустав OKD-02 36. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 37. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA 38. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 39. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 40. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 41. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3 42. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 43. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/IRE 44. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/IRE-03 45. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03 46. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/IRE-02 47. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/3-03 48. Ортез на коленный сустав AM-KD-DAM/1R 49. Ортез на коленный сустав AM-KDS-AJ/2R 50. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R 51. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R 52. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R-02 53. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD 54. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский) 55. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 56. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 57. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R 58. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R 59. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R 60. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02 61. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1 62. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02 63. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA 64. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-02 65. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2RA 66. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2RA 67. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA 68. Ортез на коленный сустав AM-OP-04 69. Ортез на коленный сустав ATOM ACL	Трикотаж	Полиэстер, полиуретан	C-460	SANWIL POLSKA Sp. Z. o. о. , Польша

70. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 71. Ортез на коленный сустав OKD-23 72. Ортез на коленный сустав OKD-27 73. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 74. Ортез на коленный сустав AM-OSS-21 75. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26 76. Ортез на коленный сустав AS-U-03 77. Ортез на коленный сустав AS-U-04 78. Ортез на коленный сустав RW-Sport 79. Ортез на коленный сустав RW-01 80. Ортез на коленный сустав FIX-KD-03 81. Ортез на коленный сустав FIX-KD-06 82. Ортез на коленный сустав FIX-KD-07 83. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 84. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 85. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/IRE 86. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R 87. Ортез на коленный сустав OKD-03 88. Ортез на коленный сустав OKD-03/10 89. Ортез на коленный сустав OKD-03/20 90. Ортез на коленный сустав OKD-16 91. Ортез на коленный сустав OKD-18 92. Ортез на коленный сустав OKD-19 93. Ортез на коленный сустав OKD-20 94. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO 95. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 4ARMY 96. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 4ARMY 97. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA SHORT 98. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 SHORT 99. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-Z/1R 100. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-O/1R 101. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1R 102. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-07 103. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06 104. Ортез на тазобедренный сустав OKD-26 105. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/IRE 106. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05 107. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/IRE DUAL 108. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R 109. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R (детский) 110. Ортез на коленный и тазобедренный суставы OKD-10 111. Ортез на всю ногу OKD-14 112. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R 113. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL 114. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL 115. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO 116. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский) 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-04 4. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02 5. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 6. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-07 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-07 8. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 9. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-10 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 11. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 12. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02 13. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 14. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 15. Ортез на коленный сустав AS-SK-02 16. Ортез на коленный сустав AS-SK/F 17. Ортез на коленный сустав IB-SK/A 18. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F 19. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 20. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/IRE 21. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO 22. Ортез на голеностопный сустав AS-PU 23. Ортез на коленный сустав OKD-05 24. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA 25.	Деформационный трикотаж	Полиэстер	45D / 24F	CARVICO SPA, Италия
1. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/IRE 2. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/IRE-ACL	Пластиковые пружки, концевки, фиксаторы	Полиамид	40- 10-171PA6	ITW ESPANA, S.A. Испания

3. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02 4. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 5. Ортез на коленный сустав OKD-09 6. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 7. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 8. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 9. Ортез на коленный сустав AM-KDX-02 10. Ортез на коленный сустав OKD-08 11. Ортез на коленный сустав SPARTAN 12. Ортез на коленный сустав OKD-01 13. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA 14. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 15. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD 16. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский) 17. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 18. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2R 19. Ортез на коленный сустав AS-SKL/F 20. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-06 21. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 22. Ортез на коленный сустав OKD-27 23. Ортез на коленный сустав OKD-28 24. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 25. Ортез на коленный сустав AM-OSS-21 26. Ортез на коленный сустав AS-U-03 27. Ортез на коленный сустав AS-U-04 28. Ортез на коленный сустав RW-01 29. Ортез на коленный сустав FIX-KD-05 30. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/1RE 31. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R 32. Ортез на коленный сустав OKD-03 33. Ортез на коленный сустав OKD-03/10 34. Ортез на коленный сустав OKD-03/20 35. Ортез на коленный сустав OKD-25 36. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO 37. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 4ARMY 38. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 4ARMY 39. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA SHORT 40. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 SHORT 41. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1R 42. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06 43. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 44. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE 45. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05 46. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE DUAL 47. Ортез на коленный и тазобедренный суставы OKD-10 48. Ортез на всю ногу OKD-14 49. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R 50. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL 51. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL 52. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO 53. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 5. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-05 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-07 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-11 8. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-14 9. Ортез на голеностопный сустав EB-SS 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 11. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 12. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 13. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 14. Ортез на коленный сустав AS-KX-03 15. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 16. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 17. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 18. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 19. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 20. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 21. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 22. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 23. Ортез на коленный сустав EB-SK/A	SANMED, полиуретаново е трикотажное полотно с покрытием из полиуретана	Полиуретан	1014/01487/ A	SANWIL POLSKA Sp. Z. o. о. , Польша

24. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 25. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R 26. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3 27. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA 28. Ортез на коленный сустав EB-SK/2 29. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA 30. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR 31. Ортез на коленный сустав EB-SKL/1R 32. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL 33. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2R 34. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2RA 35. Ортез на коленный сустав OKD-28 36. Ортез на коленный сустав OKD-29 37. Ортез на коленный сустав IB-SK/2				
1. Ортез на голеностопный сустав AS-SS 2. Ортез на голеностопный сустав AS-SS-01 3. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-16 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-18 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 8. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE 9. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/1RE-ACL 10. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02 11. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R 12. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 13. Ортез на коленный сустав AS-SK 14. Ортез на коленный сустав AS-SK-01 15. Ортез на коленный сустав AS-SK-02 16. Ортез на коленный сустав AS-SK/F 17. Ортез на коленный сустав AS-P/RZ 18. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 19. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-03 20. Ортез на коленный сустав OKD-04 21. Ортез на коленный сустав OKD-05 22. Ортез на коленный сустав OKD-08 23. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 24. Ортез на коленный сустав SPARTAN 25. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 26. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R-01 27. Ортез на коленный сустав OKD-02 28. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 29. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 30. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03 31. Ортез на коленный сустав AM-KD-DAM/1R 32. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R 33. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R 34. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R-02 35. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD 36. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский) 37. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 38. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R 39. Ортез на коленный сустав AS-SKL/F 40. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02 41. Ортез на коленный сустав OKD-15 42. Ортез на коленный сустав OKD-24 43. Ортез на коленный сустав AM-OSS-21 44. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 45. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 46. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 47. Ортез на коленный сустав AS-U-03 48. Ортез на коленный сустав AS-U-04 49. Ортез на коленный сустав RW-01 50. Ортез на коленный сустав OKD-03 51. Ортез на коленный сустав OKD-03/10 52. Ортез на коленный сустав OKD-03/20 53. Ортез на коленный сустав IB-SK/2 54. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-07 55. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-04 56. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06 57. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE 58. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05 59. Ортез на тазобедренный сустав AS-U 60. Ортез на тазобедренный сустав TB-06 с клапаном для льда	Трикотаж	Хлопок	Pirate	AMARO Sp. Jawna, Польша

61. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/IRE DUAL 62. Ортез на всю ногу OKD-14 63. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R 64. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL 65. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL 66. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO 67. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL 68. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 69. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 70. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 71. Ортез на коленный сустав AS-KX-03 72. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z 73. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S 74. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA 75. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 76. Ортез на коленный сустав EB-SK/2 78. Ортез на коленный сустав AM-KDS-AJ/2R 79. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2R 80. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1 81. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1 82. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2 83. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02 84. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA 85. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2RA 86. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01 87. Ортез на коленный сустав ATOM ACL 88. Ортез на коленный сустав OKD-23 89. Ортез на коленный сустав RW-03 90. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 91. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 92. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 93. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 94. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 95. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 96. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 97. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 98. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 99. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R-01 100. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 101. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R-01 102. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 103. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 104. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 105. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA 106. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR 107. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-02 108. Ортез на коленный сустав OKD-29 109. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-Z/1R 110. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-O/1R 111. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский) 112. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-04 113. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 114. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-10 115. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 116. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 117. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 118. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F 119. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 120. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-22 121. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/IRE-02 122. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/3-03				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский) 2. Ортез на голеностопный сустав AM-ASS-OS 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-04 4. Ортез на голеностопный сустав R4M-SS-01 5. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-04 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-01 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-05 9. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 11. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-03 12. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-06 13. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (универсальный) 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06	Трикотажные ткани из синтетических нитей	полиэстер, полиамид	Tencel	WAMATEX P.P.H.U. Польша

(внутренний)

15. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внешний)
16. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-11
17. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-12
18. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-14
19. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-17
20. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-19
21. Ортез на голеностопный сустав EB-SS
22. Ортез на голеностопный сустав U-SS
23. Ортез на голеностопный сустав U-SS-01
24. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-03
25. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-PU-01
26. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-01
27. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02
28. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-22
29. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-23
30. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-09
31. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-10
32. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-03
33. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-05
34. Ортез на голеностопный сустав AS-U-06
35. Ортез на голеностопный сустав R4M-PU
36. Ортез на голеностопный сустав U-PU
37. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-25
38. Ортез на голеностопный и коленный суставы TB-05 с клапаном для льда
39. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/IRE
40. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/IRE-02
41. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/ZR-02
42. Ортез на коленный сустав OKD-09
43. Ортез на коленный сустав AS-KX-08
44. Ортез на коленный сустав AS-KX-07
45. Ортез на коленный сустав AS-KX-03
46. Ортез на коленный сустав U-SK
47. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/P
48. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S
49. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-P
50. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X
51. Ортез на коленный сустав TB-04 с клапаном для льда
52. Ортез на коленный сустав U-SK-01
53. Ортез на коленный сустав U-SK-02
54. Ортез на коленный сустав AM-KDX-02
55. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03
56. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA
57. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R
58. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA
59. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R
60. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3
61. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R
62. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA
63. Ортез на коленный сустав ZEUS
64. Ортез на коленный сустав EB-SK/F
65. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F
66. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01
67. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01
68. Ортез на коленный сустав EB-SK/A
69. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/3
70. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R
71. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3
72. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA
73. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03
74. Ортез на коленный сустав EB-SK/2
75. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA
76. Ортез на коленный сустав EB-SKL/1R
77. Ортез на коленный сустав AM-KDS-AJ/2R
79. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R
80. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R
81. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02
82. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2R
83. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R
84. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1
85. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1
86. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2
87. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02
88. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R
89. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R
90. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02

91. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R 92. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2 93. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02 94. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2RA 95. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA 96. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2RA 97. Ортез на коленный сустав AM-OP-05 98. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-01 99. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-02 100. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03 101. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04 102. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-05 103. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-06 104. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-07 105. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 106. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-09 107. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-10 108. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01 109. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02 110. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03 111. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02 112. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-03 113. Ортез на коленный сустав OKD-11 114. Ортез на коленный сустав ATOM ACL 115. Ортез на коленный сустав OKD-27 116. Ортез на коленный сустав OKD-29 117. Ортез на коленный сустав AM-OSS-24 118. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26 119. Ортез на коленный сустав AS-U-05 120. Ортез на коленный сустав RW-03 121. Ортез на коленный сустав FIX-KD-09 122. Ортез на коленный сустав FIX-KD-12 123. Ортез на коленный сустав OKD-16 134. Ортез на коленный сустав OKD-18 135. Ортез на коленный сустав OKD-20 136. Ортез на коленный сустав OKD-31 137. Ортез на коленный сустав IB-SK/2 138. Ортез на тазобедренный сустав 4ARMY-U-01 139. Ортез на тазобедренный сустав AM-OSS-30 140. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-08 141. Ортез на тазобедренный сустав OKD-26 142. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R 143. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R 144. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-01 145. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-02 146. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-06 147. Ортез на тазобедренный сустав U-U				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский) 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 5. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-01 6. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-03 7. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-07 9. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 11. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02 12. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 13. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 14. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 15. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 16. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 17. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 18. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 19. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 20. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 21. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/1RE 22. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R 22. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO 23. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06 24. Ортез на тазобедренный сустав R4M-U-01 25. Ортез на коленный и тазобедренный суставы OKD-10 26. Ортез на всю ногу OKD-13 27. Ортез на всю ногу OKD-14 28. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R 29. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL 30. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL 31. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX	Трикотаж	Полиэстер	Dz. Łezka N4 130g 75D	P.P.H.U. KOLREX, Польша

PLUS TLSO 32. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL 33. Ортез на коленный сустав EB-SK/2 34. Ортез на коленный сустав OKD-23 35. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 36. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-01 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский) 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-04 5. Ортез на голеностопный сустав R4M-SS-01 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-01 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-05 9. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 11. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-02 12. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-06 13. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (универсальный) 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-07 15. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-10 16. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-11 17. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 18. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-14 19. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15 20. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 21. Ортез на голеностопный сустав U-SS 22. Ортез на голеностопный сустав U-SS-01 23. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-03 24. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-01 25. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-25 26. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z 27. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X 28. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 29. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 30. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 31. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 32. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 33. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 34. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 35. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 36. Ортез на коленный сустав EB-SK/2 37. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA 38. Ортез на коленный сустав EB-SKL/1R 39. Ортез на коленный сустав RW-ProFit 40. Ортез на коленный сустав RW-Sport 41. Ортез на коленный сустав RW-PowerFit 42. Ортез на коленный сустав FIX-KD-01 43. Ортез на коленный сустав FIX-KD-02 44. Ортез на коленный сустав FIX-KD-03 45. Ортез на коленный сустав FIX-KD-04 46. Ортез на коленный сустав FIX-KD-05 47. Ортез на коленный сустав FIX-KD-06 48. Ортез на коленный сустав FIX-KD-07 49. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 50. Ортез на коленный сустав FIX-KD-09 51. Ортез на коленный сустав FIX-KD-10 52. Ортез на коленный сустав FIX-KD-12 53. Ортез на коленный сустав FIX-KD-13 54. Ортез на коленный сустав OKD-16 55. Ортез на коленный сустав OKD-18 56. Ортез на коленный сустав IB-SK/2 57. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-02 58. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-11 59. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 60. Ортез на тазобедренный сустав PCO-L-03 61. Ортез на всю ногу PCO-L-01 62. Ортез на всю ногу PCO-L-02 63. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02 64. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-05 65. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-01 66. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 67. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-07 68. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-08 69. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 70. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-16 71. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-17 72. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-18	Эластичный трикотаж	полиэфир, спандекс	DAEWOO	TK Chemical Corporation IIF, SM R&D Center, Республика Korea

73. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-19				
74. Ортез на голеностопный сустав EB-SS				
75. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-PU-01				
76. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02				
77. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-23				
78. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-09				
79. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-10				
80. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-02				
81. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-03				
82. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-05				
83. Ортез на голеностопный сустав R4M-PU				
84. Ортез на голеностопный сустав PCO-L-11				
85. Ортез на голеностопный сустав PCO-L-12				
86. Ортез на коленный сустав R4M-SK				
87. Ортез на коленный сустав R4M-SK/F				
88. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3				
89. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA				
90. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R				
91. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA				
92. Ортез на коленный сустав AM-KDS-AJ/2R				
93. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2R				
94. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2				
95. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02				
96. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2				
97. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R				
98. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02				
99. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R				
100. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2				
101. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02				
102. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA				
103. Ортез на коленный сустав AM-OP-04				
104. Ортез на коленный сустав AM-OP-05				
105. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-01				
106. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-02				
107. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03				
108. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04				
109. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-05				
110. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-06				
111. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-07				
112. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08				
113. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-09				
114. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-10				
115. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01				
116. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02				
117. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03				
118. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02				
119. Ортез на коленный сустав OKD-11				
120. Ортез на коленный сустав OKD-12				
121. Ортез на коленный сустав OKD-15				
122. Ортез на коленный сустав OKD-24				
123. Ортез на коленный сустав OKD-29				
124. Ортез на коленный сустав AM-OSS-24				
125. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26				
126. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27				
127. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28				
128. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29				
129. Ортез на коленный сустав AS-U-05				
130. Ортез на коленный сустав RW-03				
131. Ортез на коленный сустав OKD-31				
132. Ортез на тазобедренный сустав 4ARMY-U-01				
133. Ортез на тазобедренный сустав AM-OSS-30				
134. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01				
135. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-02				
136. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-03				
137. Ортез на тазобедренный сустав R4M-U				
138. Ортез на тазобедренный сустав R4M-U-01				
139. Ортез на тазобедренный сустав PCO-L-10				
140. Ортез на тазобедренный сустав PCO-L-03				
141. Ортез на всю ногу PCO-L-08				
142. Ортез на всю ногу PCO-L-09				
143. Ортез на коленный сустав OKD-27				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03	Липучки велкро	Полиамид	VL 440	GEISA FABRICS, S.L., Барселона, Испания
2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский)				
3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-04				
4. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02				
5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA				
6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский)				
7. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-04				
8. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA				

9. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 11. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-03 12. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 13. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-07 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-07 15. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-08 16. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 17. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-10 18. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-12 19. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-17 20. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-19 21. Ортез на голеностопный сустав EB-SS 22. Ортез на голеностопный сустав U-SS 23. Ортез на голеностопный сустав U-SS-01 24. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-03 25. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-PU-01 26. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-01 27. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-22 28. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-23 29. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-09 30. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-10 31. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-02 32. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-03 33. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-05 34. Ортез на голеностопный сустав AS-PU 35. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-01 36. Ортез на голеностопный сустав U-PU 37. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-25 38. Ортез на коленный сустав OKD-09 39. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 40. Ортез на коленный сустав U-SK 41. Ортез на коленный сустав AS-SK-02 42. Ортез на коленный сустав U-SK-01 43. Ортез на коленный сустав AM-KDX-02 44. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F 45. Ортез на коленный сустав OKD-15 46. Ортез на коленный сустав OKD-27 47. Ортез на коленный сустав AM-OSS-24 48. Ортез на коленный сустав FIX-KD-13 49. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R 50. Ортез на коленный сустав OKD-16 51. Ортез на коленный сустав OKD-18 52. Ортез на коленный сустав OKD-19 53. Ортез на коленный сустав OKD-20 54. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1R 55. Ортез на тазобедренный сустав AM-OSS-30 56. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-07 57. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-04 58. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01 59. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-02 60. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 61. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R 62. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-01 63. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-02 64. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-03 65. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-06 66. Ортез на тазобедренный сустав R4M-U-01 67. Ортез на тазобедренный сустав AS-U 68. Ортез на тазобедренный сустав TB-06 с клапаном для льда 69. Ортез на тазобедренный сустав U-U 70. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R 71. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R (детский)				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-02 2. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-06 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 4. Ортез на голеностопный сустав AS-PU 5. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-01 6. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-09 7. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-10 8. Ортез на коленный и тазобедренный суставы OKD-10 9. Ортез на голеностопный сустав AS-SS 10. Ортез на голеностопный сустав AS-SS-01 11. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-01 12. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 13. Ортез на коленный сустав AS-KX-08 14. Ортез на коленный сустав AS-KX-07 15. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 16. Ортез на коленный сустав AS-KX-03	Трикотажные ткани	хлопок, полиамида, полиэстера	SINGIEL	Tejidos Indesmallables Geisa, S.L., Испания

17. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S 18. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-P 19. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X 20. Ортез на коленный сустав AS-SK 21. Ортез на коленный сустав AS-SK-01 22. Ортез на коленный сустав AS-SK-02 23. Ортез на коленный сустав AS-SK/F 24. Ортез на коленный сустав AS-P/RZ 25. Ортез на коленный сустав IB-SK/A 26. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2R 27. Ортез на коленный сустав OKD-04 28. Ортез на коленный сустав OKD-08 29. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 30. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 31. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 32. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 33. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 34. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 35. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R 36. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3 37. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03 38. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA 39. Ортез на коленный сустав EB-SKL/1R 40. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL 41. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2 42. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R 43. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R 44. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02 45. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R 46. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2 47. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-02 48. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2RA 49. Ортез на коленный сустав AS-SKL/F 50. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA 51. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02 52. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2RA 53. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02 54. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03 55. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02 56. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-03 57. Ортез на коленный сустав OKD-12 58. Ортез на коленный сустав OKD-15 59. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 60. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26 61. Ортез на коленный сустав AS-U-05 62. Ортез на коленный сустав OKD-17 63. Ортез на коленный сустав OKD-25 64. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01 65. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-01 66. Ортез на тазобедренный сустав AS-U 67. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 68. Ортез на коленный сустав OKD-06 69. Ортез на коленный сустав OKD-07 70. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 71. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R 72. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 73. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-22				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 6. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-01 7. Ортез на коленный сустав AM-KDX-02 8. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 9. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2 10. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02 11. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R 12. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2 13. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02 14. Ортез на коленный сустав AM-OP-04 15. Ортез на коленный сустав AM-OP-05 16. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01 17. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02 18. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03 19. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02 20. Ортез на коленный сустав OKD-23 21. Ортез на коленный сустав AS-U-03	Черная Нейлоновая крепежная Лента.	Нейлон	NA	Halco Products, Великобритания

22. Ортез на коленный сустав AS-U-04 23. Ортез на коленный сустав AS-U-05 24. Ортез на коленный сустав RW-01 25. Ортез на коленный сустав RW-03 26. Ортез на коленный сустав FIX-KD-01 27. Ортез на коленный сустав FIX-KD-02 28. Ортез на коленный сустав FIX-KD-03 29. Ортез на коленный сустав FIX-KD-04 30. Ортез на коленный сустав FIX-KD-06 31. Ортез на коленный сустав FIX-KD-07 32. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 33. Ортез на коленный сустав FIX-KD-13 34. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 35. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-01 36. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-03 37. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-02 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15 3. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02 4. Ортез на голеностопный сустав AS-U-06 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 6. Ортез на голеностопный и коленный суставы TB-05 с клапаном для льда 7. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R 8. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 9. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 10. Ортез на коленный сустав AS-KX-08 11. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/P 12. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-P 13. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X 14. Ортез на коленный сустав TB-04 с клапаном для льда 15. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 16. Ортез на коленный сустав IB-SK/A 17. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 18. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 19. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 20. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 21. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 22. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 23. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 24. Ортез на коленный сустав OKD-04 25. Ортез на коленный сустав OKD-05 26. Ортез на коленный сустав OKD-06 27. Ортез на коленный сустав OKD-07 28. Ортез на коленный сустав OKD-08 29. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 30. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 31. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 32. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R-01 33. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 34. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R-01 35. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 36. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R-01 37. Ортез на коленный сустав OKD-01 38. Ортез на коленный сустав OKD-02 39. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA 40. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 41. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 42. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 43. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R 44. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3 45. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA 46. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE 47. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE-03 48. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03 49. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE-02 50. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 51. Ортез на коленный сустав EB-SK/2 52. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA 53. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR 54. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL 55. Ортез на коленный сустав AM-KD-DAM/1R 56. Ортез на коленный сустав AM-KDS-AJ/2R 57. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R 58. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R 59. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R-02 60. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD 61. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский)	Ремни велкро	Полиамид	367227206-15	SGS Taiwan, Тайвань

62. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 63. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R 64. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R 65. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R 66. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02 67. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2R 68. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1 69. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1 70. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2 71. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02 72. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2 73. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R 74. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R 75. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R 76. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02 77. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R 78. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2 79. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02 80. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA 81. Ортез на коленный сустав AS-SKL/F 82. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA 83. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02 84. Ортез на коленный сустав AM-OP-04 85. Ортез на коленный сустав AM-OP-05 86. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-01 87. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-02 88. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03 89. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04 90. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-06 91. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-07 92. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 93. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01 94. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02 95. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03 96. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02 97. Ортез на коленный сустав OKD-24 98. Ортез на коленный сустав OKD-28 99. Ортез на коленный сустав OKD-29 100. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 101. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26 102. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 103. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 104. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 105. Ортез на коленный сустав AS-U-03 106. Ортез на коленный сустав AS-U-04 107. Ортез на коленный сустав AS-U-05 108. Ортез на коленный сустав RW-03 109. Ортез на коленный сустав FIX-KD-06 110. Ортез на коленный сустав FIX-KD-09 111. Ортез на коленный сустав FIX-KD-10 112. Ортез на коленный сустав FIX-KD-12 113. Ортез на коленный сустав IB-SK/2 114. Ортез на тазобедренный сустав 4ARMY-U-01 115. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06 116. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE 117. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05 118. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE DUAL 119. Ортез на всю ногу OKD-13 120. Ортез на всю ногу OKD-14 121. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R 122. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL 123. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL 124. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO 125. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 4. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-02 5. Ортез на коленный сустав OKD-09 6. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X 7. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02 8. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 9. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 10. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 11. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 12. Ортез на коленный сустав FIX-KD-07 13. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 14. Ортез на коленный сустав OKD-20	Синтетическая пряжа(нити)	полиамид, полиэстер	L 75 DR	ZWCh Stilon SA, Польша

15. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01 16. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-11 17. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-06 18. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 19. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02 20. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-08 21. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-01 22. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-08 23. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 24. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-10 25. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-16 26. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-17 27. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-18 28. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-19				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-02 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 6. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 7. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 8. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 9. Ортез на коленный сустав EB-P/RZ 10. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 11. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 12. Ортез на коленный сустав OKD-06 13. Ортез на коленный сустав OKD-07 14. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 15. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 16. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Q/1R-01 17. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 18. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R-01 19. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 20. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 21. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA 22. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 23. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 24. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE 25. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 26. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR 27. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский) 28. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Q/1R 29. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA 30. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-02 31. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Q/2RA 32. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA 33. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2RA 34. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 35. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 36. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 37. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 38. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-Z/1R 39. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-Q/1R 40. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1R 41.	Трикотаж	Полиэстер	S-13/ 270	Janmar Sport, Польша
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-02 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 3. Ортез на голеностопный сустав AS-SS 4. Ортез на голеностопный сустав AS-SS-01 5. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-04 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-01 7. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-05 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-01 9. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 10. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-06 11. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-07 12. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (универсальный) 13. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внутренний) 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внешний) 15. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-07 16. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-08 17. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 18. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-11 19. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-12 20. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-14 21. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15	Неопреновая ткань	Неопрен	CP17-069338 - SZ	SGS, Китай

22. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-16			
23. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-17			
24. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-18			
25. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-19			
26. Ортез на голеностопный сустав U-SS			
27. Ортез на голеностопный сустав U-SS-01			
28. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-03			
29. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-PU-01			
30. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-01			
31. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02			
32. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-22			
33. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-23			
34. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-09			
35. Ортез на голеностопный сустав AM-SB-10			
36. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-02			
37. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-03			
38. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-05			
39. Ортез на голеностопный сустав AS-PU			
40. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-01			
41. Ортез на голеностопный сустав U-PU			
42. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-25			
43. Ортез на голеностопный и коленный суставы TB-05 с клапаном для льда			
44. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R			
45. Ортез на коленный сустав OKD-09			
46. Ортез на коленный сустав AS-KX-06			
47. Ортез на коленный сустав AS-KX-05			
48. Ортез на коленный сустав AS-KX-04			
49. Ортез на коленный сустав AS-KX-08			
50. Ортез на коленный сустав AS-KX-07			
51. Ортез на коленный сустав AS-KX-03			
52. Ортез на коленный сустав U-SK			
53. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z			
54. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/P			
55. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S			
56. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-P			
57. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X			
58. Ортез на коленный сустав AS-SK			
59. Ортез на коленный сустав AS-SK-01			
60. Ортез на коленный сустав AS-SK-02			
61. Ортез на коленный сустав AS-SK/F			
62. Ортез на коленный сустав TB-04 с клапаном для льда			
63. Ортез на коленный сустав AS-P/RZ			
64. Ортез на коленный сустав U-SK-01			
65. Ортез на коленный сустав U-SK-02			
66. Ортез на коленный сустав AM-KDX-02			
67. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03			
68. Ортез на коленный сустав IB-SK/A			
69. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3			
70. Ортез на коленный сустав ZEUS			
71. Ортез на коленный сустав OKD-04			
72. Ортез на коленный сустав OKD-05			
73. Ортез на коленный сустав OKD-08			
74. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F			
75. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01			
76. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01			
77. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A			
78. Ортез на коленный сустав AS-SK/A			
79. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL			
80. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R			
81. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02			
82. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2R			
83. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1			
84. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1			
85. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2			
86. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02			
87. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2			
88. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R			
89. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R			
90. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R			
91. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02			
92. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R			
93. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2			
94. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02			
95. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA			
96. Ортез на коленный сустав AS-SKL/F			
97. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA			
98. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02			
99. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2RA			

100. Ортез на коленный сустав AM-OP-05 101. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-01 102. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-02 103. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03 104. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04 105. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-05 106. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-06 107. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-07 108. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 109. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-09 110. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-10 111. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01 112. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02 113. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03 114. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02 115. Ортез на коленный сустав OKD-11 116. Ортез на коленный сустав OKD-12 117. Ортез на коленный сустав OKD-15 118. Ортез на коленный сустав OKD-23 119. Ортез на коленный сустав OKD-27 120. Ортез на коленный сустав AM-OSS-24 121. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26 122. Ортез на коленный сустав AS-U-05 123. Ортез на коленный сустав RW-03 124. Ортез на коленный сустав FIX-KD-01 125. Ортез на коленный сустав FIX-KD-02 126. Ортез на коленный сустав FIX-KD-03 127. Ортез на коленный сустав FIX-KD-04 128. Ортез на коленный сустав FIX-KD-05 129. Ортез на коленный сустав FIX-KD-06 130. Ортез на коленный сустав FIX-KD-07 131. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 132. Ортез на коленный сустав FIX-KD-09 133. Ортез на коленный сустав FIX-KD-12 134. Ортез на коленный сустав FIX-KD-13 135. Ортез на коленный сустав OKD-16 136. Ортез на коленный сустав OKD-17 137. Ортез на коленный сустав OKD-18 138. Ортез на коленный сустав OKD-19 139. Ортез на коленный сустав OKD-20 140. Ортез на коленный сустав OKD-25 141. Ортез на тазобедренный сустав 4ARMY-U-01 142. Ортез на тазобедренный сустав AM-OSS-30 143. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-08 144. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-04 145. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01 146. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-02 147. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-11 148. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 149. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R 150. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-01 151. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-02 152. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-03 153. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-06 154. Ортез на тазобедренный сустав AS-U 155. Ортез на тазобедренный сустав TB-06 с клапаном для льда 156. Ортез на тазобедренный сустав U-U				
1. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-04 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-01 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (универсальный) 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внутренний) 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внешний) 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-12 7. Ортез на голеностопный сустав U-SS 8. Ортез на голеностопный сустав U-SS-01 9. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-03 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-22 11. Ортез на голеностопный сустав AS-U-06 12. Ортез на голеностопный сустав U-PU 13. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-25 15. Ортез на голеностопный и коленный суставы TB-05 с клапаном для льда 16. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/IRE 17. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/IRE-ACL	Ворсованная ткань	Велюр	B10-2	Halco Europe LTD, Великобритания

18. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02				
19. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02				
20. Ортез на коленный сустав OKD-09				
21. Ортез на коленный сустав U-SK				
22. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/P				
23. Ортез на коленный сустав TB-04 с клапаном для льда				
24. Ортез на коленный сустав EB-P/RZ				
25. Ортез на коленный сустав U-SK-01				
26. Ортез на коленный сустав U-SK-02				
27. Ортез на коленный сустав AM-KDX-02				
28. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03				
29. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3				
30. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-03				
31. Ортез на коленный сустав SPARTAN				
32. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F				
33. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R-01				
34. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA				
35. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA				
36. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE				
37. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE-03				
38. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03				
39. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE-02				
40. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/3-03				
41. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL				
42. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R				
43. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R				
44. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R-02				
45. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD				
46. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский)				
47. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02				
48. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02				
49. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R				
50. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R				
51. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02				
52. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2R				
53. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1				
54. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1				
55. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R				
56. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2				
57. Ортез на коленный сустав AM-OSS-24				
58. Ортез на коленный сустав AS-U-03				
59. Ортез на коленный сустав AS-U-04				
60. Ортез на коленный сустав RW-01				
61. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/1RE				
62. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R				
63. Ортез на коленный сустав OKD-03				
64. Ортез на коленный сустав OKD-03/10				
65. Ортез на коленный сустав OKD-03/20				
66. Ортез на коленный сустав OKD-16				
67. Ортез на коленный сустав OKD-17				
68. Ортез на коленный сустав OKD-18				
69. Ортез на коленный сустав OKD-19				
70. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO				
71. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 4ARMY				
72. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 4ARMY				
73. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA SHORT				
74. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 SHORT				
75. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-08				
76. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-04				
77. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06				
78. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01				
79. Ортез на тазобедренный сустав OKD-26				
80. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE				
81. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R				
82. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-03				
83. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05				
84. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-06				
85. Ортез на тазобедренный сустав TB-06 с клапаном для льда				
86. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE DUAL				
87. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R				
88. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R (детский)				
89. Ортез на всю ногу OKD-14				
90. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R				
91. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL				
92. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL				
93. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO				

94. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-02 2. Ортез на голеностопный сустав AM-ASS-OS 3. Ортез на голеностопный сустав AS-SS-01 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-02 5. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-08 6. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE 7. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/1RE-ACL 8. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02 9. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 10. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 11. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 12. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z 13. Ортез на коленный сустав AS-P/RZ 14. Ортез на коленный сустав EB-P/RZ 15. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2R 16. Ортез на коленный сустав ZEUS 17. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-03 18. Ортез на коленный сустав SPARTAN 19. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 20. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 21. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 22. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2R 23. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2RA 24. Ортез на коленный сустав OKD-12 25. Ортез на коленный сустав ATOM ACL 26. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 27. Ортез на коленный сустав OKD-23 28. Ортез на коленный сустав AM-OSS-21 29. Ортез на коленный сустав RW-01 30. Ортез на коленный сустав FIX-KD-05 31. Ортез на коленный сустав OKD-17 32. Ортез на коленный сустав OKD-25 33. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 4ARMY 34. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 4ARMY 35. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA SHORT 36. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 SHORT 37. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 38. Ортез на тазобедренный сустав OKD-26	Тканная лента (велькро)	Полыамид	25038-54-4	Halco Europe LTD, Великобритания
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-02 2. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-02 6. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-08 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 8. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 9. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-02 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15 11. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R 12. Ортез на коленный сустав AS-KX-07 13. Ортез на коленный сустав ZEUS 14. Ортез на коленный сустав OKD-05 15. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 16. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 17. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 18. Ортез на коленный сустав OKD-01 19. Ортез на коленный сустав OKD-02 20. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 21. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 22. Ортез на коленный сустав AM-KD-DAM/1R 23. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2RA 24. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 25. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-03 26. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 27. Ортез на коленный сустав OKD-23 28. Ортез на коленный сустав OKD-27 29. Ортез на коленный сустав FIX-KD-04 30. Ортез на коленный сустав FIX-KD-09 31. Ортез на коленный сустав FIX-KD-10 32. Ортез на коленный сустав FIX-KD-13 33. Ортез на коленный сустав OKD-20	Ворсованная ткань	Полыамид	Weir PA 165g/m2	ZAKŁAD PRODUKCJI DZIEWIARSKIEJ WALDEMAR ROSIŃSKI, Польша

34. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-Z/1R 35. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-O/1R 36. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1R 37. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-11 38. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE 39. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05 40. Ортез на тазобедренный сустав R4M-U-01 41. Ортез на тазобедренный сустав U-U 42. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE DUAL 43. Ортез на коленный и тазобедренный суставы OKD-10				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-ASS-OS 2. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-02 5. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-08 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05 (детский) 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-07 9. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внутренний) 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внешний) 11. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-10 12. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-12 13. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 15. Ортез на голеностопный сустав AM-OP-03 16. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02 17. Ортез на голеностопный и коленный суставы TB-05 с клапаном для льда 18. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE 19. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/1RE-ACL 20. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02 21. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R 22. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 23. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 24. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 25. Ортез на коленный сустав AS-KX-08 26. Ортез на коленный сустав AS-KX-07 27. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 28. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 29. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z 30. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/P 31. Ортез на коленный сустав AS-SK/F 32. Ортез на коленный сустав TB-04 с клапаном для льда 33. Ортез на коленный сустав EB-P/RZ 34. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 35. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2R 36. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 37. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 38. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 39. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 40. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 41. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 42. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 43. Ортез на коленный сустав ZEUS 44. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-03 45. Ортез на коленный сустав OKD-04 46. Ортез на коленный сустав OKD-05 47. Ортез на коленный сустав OKD-06 48. Ортез на коленный сустав OKD-07 49. Ортез на коленный сустав OKD-08 50. Ортез на коленный сустав SPARTAN 51. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 52. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 53. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R-01 54. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 55. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R-01 56. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 57. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R-01 58. Ортез на коленный сустав OKD-01 59. Ортез на коленный сустав OKD-02 60. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 61. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA 62. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/3 63. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R	Шины вставки	Алюминиевый сплав	424005.21	Josef Pauer - METAL TRADE, Чехия

64. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3			
65. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA			
66. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL			
67. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE			
68. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE-03			
69. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03			
70. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1RE-02			
71. Ортез на коленный сустав EB-SK/2			
72. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA			
73. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR			
74. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/3-03			
75. Ортез на коленный сустав EB-SKL/1R			
76. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL			
77. Ортез на коленный сустав AM-KDS-AJ/2R			
78. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R			
79. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R-02			
80. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD			
81. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD (детский)			
82. Ортез на коленный сустав AM-TUD-KD-02			
83. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R			
84. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R			
85. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02			
86. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2R			
87. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2R			
88. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1			
89. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1			
90. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2			
91. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02			
92. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2			
93. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R			
94. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02			
95. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R			
96. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2			
97. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02			
98. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA			
99. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-02			
100. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2RA			
101. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZJ/2RA			
102. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA			
103. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02			
104. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2RA			
105. Ортез на коленный сустав AM-OP-04			
106. Ортез на коленный сустав AM-OP-05			
107. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-01			
108. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-02			
109. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03			
110. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-07			
111. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01			
112. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02			
113. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03			
114. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02			
115. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-03			
116. Ортез на коленный сустав ATOM ACL			
117. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC			
118. Ортез на коленный сустав OKD-23			
119. Ортез на коленный сустав OKD-24			
120. Ортез на коленный сустав OKD-29			
121. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2			
122. Ортез на коленный сустав AM-OSS-21			
123. Ортез на коленный сустав AM-OSS-26			
124. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27			
125. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28			
126. Ортез на коленный сустав AS-U-03			
127. Ортез на коленный сустав AS-U-04			
128. Ортез на коленный сустав AS-U-05			
129. Ортез на коленный сустав RW-01			
130. Ортез на коленный сустав FIX-KD-09			
131. Ортез на коленный сустав FIX-KD-10			
133. Ортез на коленный сустав FIX-KD-12			
134. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/1RE			
135. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R			
136. Ортез на коленный сустав OKD-03			
137. Ортез на коленный сустав OKD-03/10			
138. Ортез на коленный сустав OKD-03/20			
139. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO			
140. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 4ARMY			
141. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 4ARMY			
142. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA SHORT			
143. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 SHORT			
144. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-Z/1R			

145. Ортез на коленный сустав AM-DOSK-O/1R 146. Ортез на коленный сустав IB-SK/2 147. Ортез на тазобедренный сустав AS-PU-06 148. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-01 149. Ортез на тазобедренный сустав FIX-KD-19 150. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE 151. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R 152. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/2R 153. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-01 154. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-05 155. Ортез на тазобедренный сустав TB-06 с клапаном для льда 156. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1RE DUAL 157. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R 158. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R (детский) 159. Ортез на всю ногу OKD-13 160. Ортез на всю ногу OKD-14 161. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R 162. Ортез на всю ногу COMPLEX/2R DUAL 163. Ортез на всю ногу OKD-14 DUAL				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 4. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-02 5. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-06 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (универсальный) 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 8. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 9. Ортез на коленный сустав AS-KX-02 10. Ортез на коленный сустав AS-KX-03 11. Ортез на коленный сустав IB-SK/A 12. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3 13. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 14. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 15. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 16. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 17. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL 18. Ортез на коленный сустав AS-SKL/F 19. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04 20. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-06 21. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 22. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 23. Ортез на коленный сустав RW-03 24. Ортез на коленный сустав OKD-16 25. Ортез на коленный сустав OKD-20 26. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-06	Шины вставки	Сталь (FE)	ST 34	RUR-DAN Marian Misztal, Польша
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-02 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03 (детский) 4. Ортез на голеностопный сустав OSS-OS-02 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA 6. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-03/CCA (детский) 7. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-05/CCA 8. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-03 9. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-04 10. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внутренний) 11. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-06 (внешний) 12. Ортез на голеностопный сустав AS-PU 13. Ортез на голеностопный сустав R4M-PU 14. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-25 15. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KD-AM/1RE-ACL 16. Ортез на коленный сустав AS-KX-08 17. Ортез на коленный сустав AS-KX-07 18. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/P 19. Ортез на коленный сустав IB-SK/A 20. Ортез на коленный сустав OKD-04 21. Ортез на коленный сустав OKD-05 22. Ортез на коленный сустав OKD-06 23. Ортез на коленный сустав OKD-07 24. Ортез на коленный сустав OKD-08 25. Ортез на коленный сустав SPARTAN 26. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 27. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 28. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R-01 29. Ортез на коленный сустав AM-KD-DAM/1R	Шины вставки	Пластик	ABS	ZiNTH Elektromaschinenbau GmbH, Германия

30. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R 31. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R 32. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R 33. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2 34. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2-02 35. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R 36. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R 37. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R 38. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R-02 39. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/2R 40. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2 41. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2-02 42. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-01 43. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-02 44. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SB-03 45. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-02 46. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-03 47. Ортез на коленный сустав ATOM ACL 48. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 49. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 50. Ортез на коленный сустав AS-U-05 51. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/1RE 52. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/2R 53. Ортез на коленный сустав OKD-18 54. Ортез на коленный сустав OKD-25 55. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO 56. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB/1R 57. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R 58. Ортез на тазобедренный сустав AM-ADS-R (детский) 59. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO 60. Ортез на нижние конечности и туловище COMPLEX PLUS TLSO DUAL 61. Ортез на голеностопный сустав AM-ASS-OS 62. Ортез на голеностопный сустав AS-U-06 63. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-21/CCA 64. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE 65. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02 66. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 67. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/3-03 68. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL 69. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/1R 70. Ортез на голеностопный сустав AM-SX-05 71. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-02 72. Ортез на коленный сустав R4M-SK/F 73. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3 74. Ортез на коленный сустав EB-SK/A 75. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 76. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 77. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 78. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 79. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 80. Ортез на коленный сустав FIX-KD-02 81. Ортез на коленный сустав FIX-KD-06 82. Ортез на коленный сустав FIX-KD-07 83. Ортез на коленный сустав FIX-KD-08 84. Ортез на тазобедренный сустав AM-SB-08 85. Ортез на тазобедренный сустав R4M-U-01				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-07 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-08 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-09 4. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-11 5. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-15 6. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-02 7. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE 8. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/1RE-02 9. Ортез на голеностопный и коленный суставы AM-KDS-AM/2R-02 10. Ортез на коленный сустав OKD-09 11. Ортез на коленный сустав AS-KX-06 12. Ортез на коленный сустав AS-KX-05 13. Ортез на коленный сустав AS-KX-04 14. Ортез на коленный сустав AS-KX-08 15. Ортез на коленный сустав AS-KX-01 16. Ортез на коленный сустав AS-KX-02	Силиконовые вставки, подушечки	Силикон	A14-16	Fresco, Испания

17. Ортез на коленный сустав AS-KX-03 18. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z 19. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S 20. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-P 21. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-X 22. Ортез на коленный сустав AS-SK 23. Ортез на коленный сустав AS-SK-01 24. Ортез на коленный сустав AS-SK/F 25. Ортез на коленный сустав AS-P/RZ 26. Ортез на коленный сустав EB-P/RZ 27. Ортез на коленный сустав U-SK-01 28. Ортез на коленный сустав U-SK-02 29. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 30. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2R 31. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 32. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 33. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 34. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 35. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 36. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 37. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 38. Ортез на коленный сустав OKD-06 39. Ортез на коленный сустав OKD-07 40. Ортез на коленный сустав OKD-08 41. Ортез на коленный сустав EB-SK/F 42. Ортез на коленный сустав OKD-Z/F 43. Ортез на коленный сустав RAPTOR/1R 44. Ортез на коленный сустав ATOM/1R 45. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R-01 46. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R-01 47. Ортез на коленный сустав OKD-02 48. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 49. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 50. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02 51. Ортез на коленный сустав AM-OP-04 52. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03 53. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04 54. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 55. Ортез на коленный сустав OKD-28 56. Ортез на коленный сустав OKD-29 57. Ортез на коленный сустав AM-OSS-21 58. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 59. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 60. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 61. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01/1RE 62. Ортез на коленный сустав AM-KDX-01 UNIVERSO 63. Ортез на коленный сустав ATOM/2RA 4ARMY 64. Ортез на коленный сустав RAPTOR BIONIC 4ARMY 65. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2RA SHORT 66. Ортез на коленный сустав RAPTOR/2 SHORT 67. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-02				
1. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-01 2. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-13 3. Ортез на голеностопный сустав AM-OSS-20 4. Ортез на голеностопный сустав 4ARMY-SS-01 5. Ортез на голеностопный сустав AS-PU-02 6. Ортез на голеностопный и коленный суставы TB-05 с клапаном для льда 7. Ортез на коленный сустав TB-04 с клапаном для льда 8. Ортез на коленный сустав AM-KDX-03 9. Ортез на коленный сустав IB-SK/A 10. Ортез на коленный сустав EB-SK/P 11. Ортез на коленный сустав IB-SK/2RA 12. Ортез на коленный сустав IB-SK/1R 13. Ортез на коленный сустав IB-SKL/2RA 14. Ортез на коленный сустав IB-SKL/1R 15. Ортез на коленный сустав IB-SKL/3 16. Ортез на коленный сустав ATTACK 1R 17. Ортез на коленный сустав ATTACK 2RA 18. Ортез на коленный сустав OKD-04 19. Ортез на коленный сустав OKD-05 20. Ортез на коленный сустав OKD-06 21. Ортез на коленный сустав OKD-07 22. Ортез на коленный сустав SPARTAN 23. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R-01 24. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/1R-01 25. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A 26. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/S-A (детский) 27. Ортез на коленный сустав EB-SK/1R 28. Ортез на коленный сустав EB-SKL/3	Резина	Резина, каучук	RE41E	Rubberlite, Inc., США

29. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA 30. Ортез на коленный сустав EB-SKL/2RA-ACL 31. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2RA-03 32. Ортез на коленный сустав AS-SK/A 33. Ортез на коленный сустав EB-SK/2 34. Ортез на коленный сустав EB-SK/2RA 35. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-OR 36. Ортез на коленный сустав EB-SKL/1R 37. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-ACL 38. Ортез на коленный сустав AM-KD-DAM/1R 39. Ортез на коленный сустав AM-KD-AM/2R-02 40. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/1R 41. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R 42. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2R-02 43. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2 44. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/1R 45. Ортез на коленный сустав AM-OSK-OL/1R 46. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2R 47. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA 48. Ортез на коленный сустав AM-OSK-Z/2RA-02 49. Ортез на коленный сустав AM-OSK-O/2RA 50. Ортез на коленный сустав AM-OSK-ZL/2RA-02 51. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-01 52. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-02 53. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-03 54. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-04 55. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-07 56. Ортез на коленный сустав 4ARMY-SK-08 57. Ортез на коленный сустав 4ARMY-U-03 58. Ортез на коленный сустав OKD-23 59. Ортез на коленный сустав OKD-29 60. Ортез на коленный сустав AM-OSS-27 61. Ортез на коленный сустав AM-OSS-28 62. Ортез на коленный сустав AM-OSS-29 63. Ортез на коленный сустав IB-SK/2 64. Ортез на тазобедренный сустав AS-U-02 65. Ортез на тазобедренный сустав TB-06 с клапаном для льда				
---	--	--	--	--

Комплект поставки медицинского изделия

Наименование	Количество
Ортез нижней конечности "REN4MAT" (одного варианта исполнения и типоразмера)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Меры предосторожности при применении

ВНИМАНИЕ !

Повторное использование изделия для других пациентов и недостаточная гигиеническая обработка

Раздражение кожи, возникновение экзем или инфекции вследствие заражения микроорганизмами

- Изделие разрешается использовать только для одного пациента.
- Регулярно чистите изделие.

Неправильное наложение или слишком тугое затягивание изделия

Раздражение кожи вследствие перегрева, локальное сдавливание в результате слишком плотного прилегания к телу

- Проверьте правильность прилегания и посадки изделия.
- Не используйте изделие в случае сомнений при возникновении раздражения кожи.

Контакт с высокими температурами, раскаленными предметами или огнем

Опасность травмирования (напр. ожоги) и опасность повреждения изделия

- Изделие хранить вдали от открытого огня, жара и других источников интенсивного теплового излучения.

ВНИМАНИЕ !

Контакт с жир- и кислотосодержащими средствами, мазями и лосьонами

Недостаточная стабилизация вследствие потери свойств материала

- Не подвергайте изделие воздействию жир- и кислотосодержащих средств, мазей и лосьонов

Ненадлежащее использование и изменения

Изменение или утрата функций, а также повреждение изделия

- Следует использовать изделие только по назначению и обращаться с ним аккуратно.
- Внесение изменений, изначально не предусмотренных конструкцией изделия, не допускается.

Использование изношенного или поврежденного изделия

Ограниченное действие

- Каждый раз перед использованием изделия необходимо выполнять его контроль на предмет надлежащей работы, наличия признаков износа и повреждений.
- Не используйте продукт в случае его неисправности, наличия признаков износа или при повреждении.

Схема производственного процесса



Способ применения

Продолжительность ежедневного ношения изделия, а также общий срок его использования Устанавливаются врачом.

- Первичная примерка и подгонка изделия должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Проинструктируйте пациента о правилах обращения с изделием и ухода за ним.
- Обратите внимание пациента на то, что он должен незамедлительно обратиться к врачу при появлении каких-либо необычных изменений (например, новых жалоб).

AM-OSS-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-03 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-ASS-OS

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.





AM-OSS-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



R4M-SS-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AS-SS



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AS-SS-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

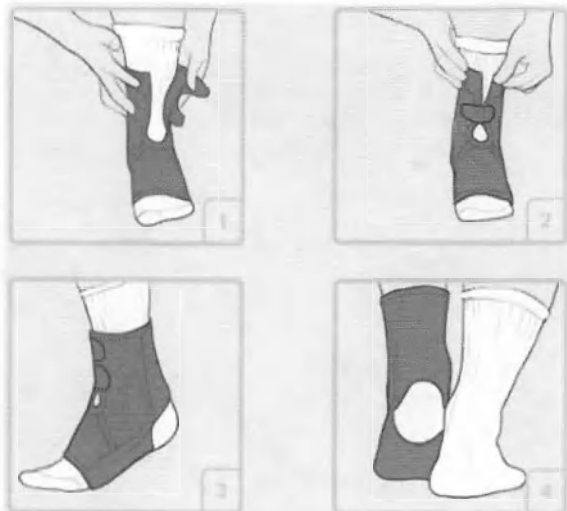


OSS-OS-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

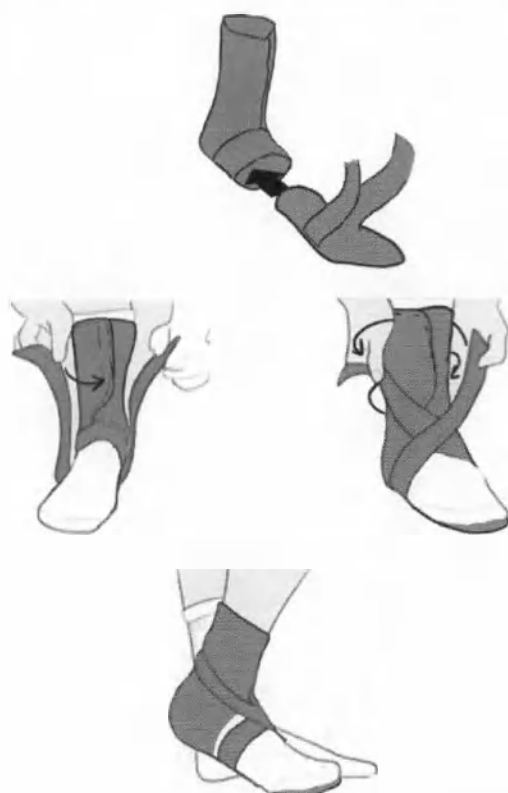

AM-OSS-03/CCA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-03/CCA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




OSS-OS-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

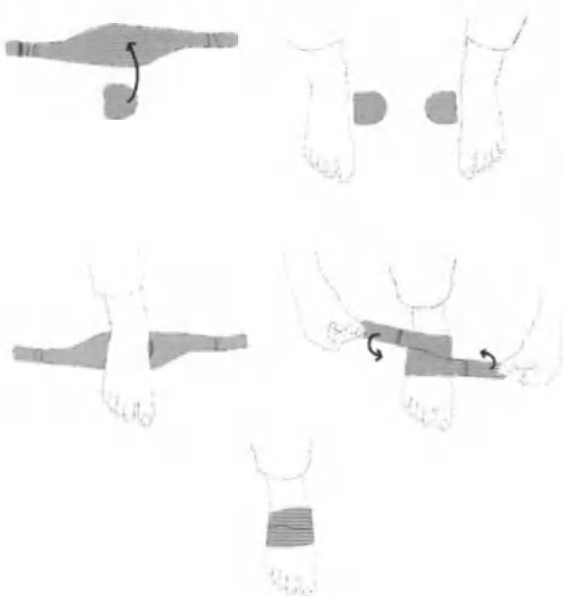



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

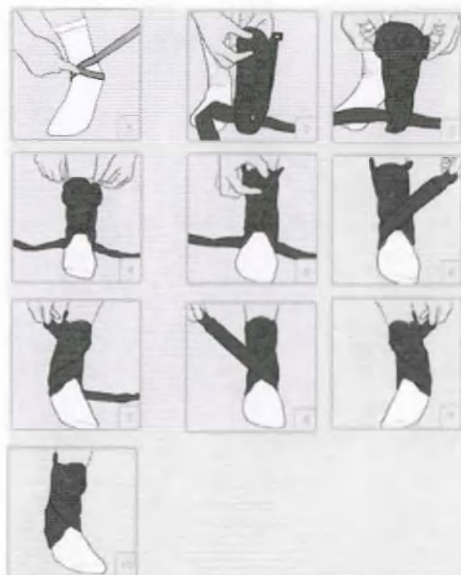


Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



1) Наденьте ортез на палец

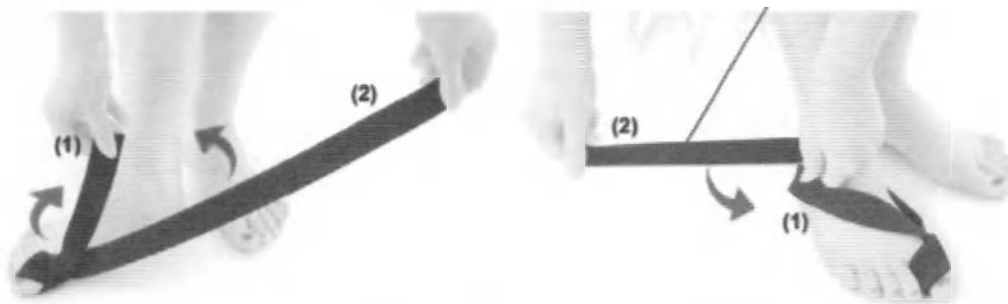

- 2) Пристегните ремни (1, 2) в соответствии с указанным направлением. При необходимости отрежьте лишнюю длину ремня (2).



- 3) Готовое изделие

AM-OP-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



- 1) Положите ногу на ортез таким образом, чтобы сустав МТР находился в отверстии алюминиевой рейки.
2) Застегните метатарзальный ремень (1) по указанному направлению.



- 3) Проденьте ремешок большого пальца (2) через отверстие Шины и затем закрепите в указанном направлении




4) Готовое изделие

AM-SX-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию. Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

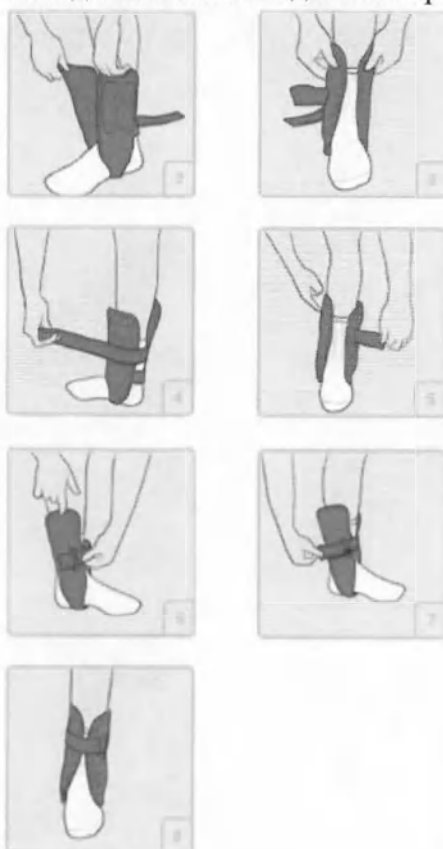

AM-SX-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-OSS-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

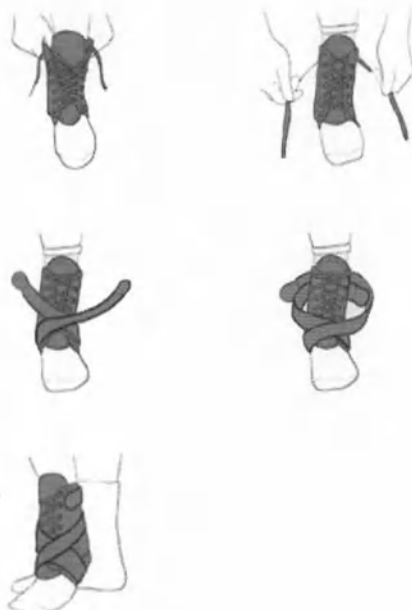




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

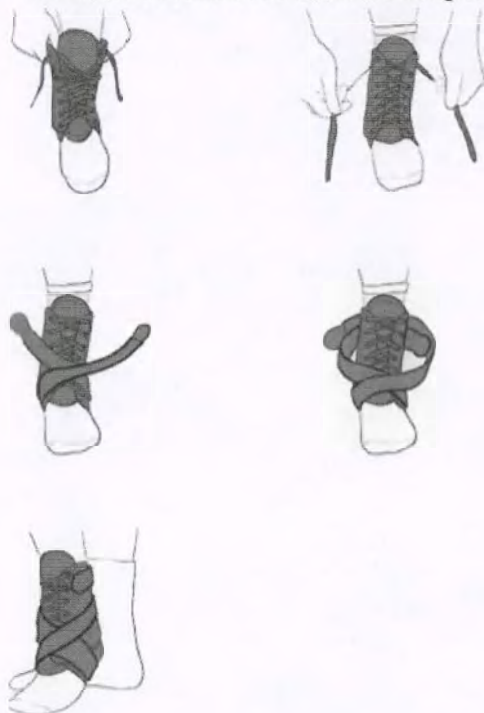

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

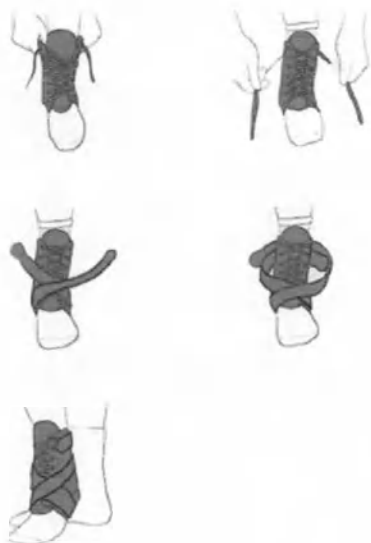

AM-SX-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-SX-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

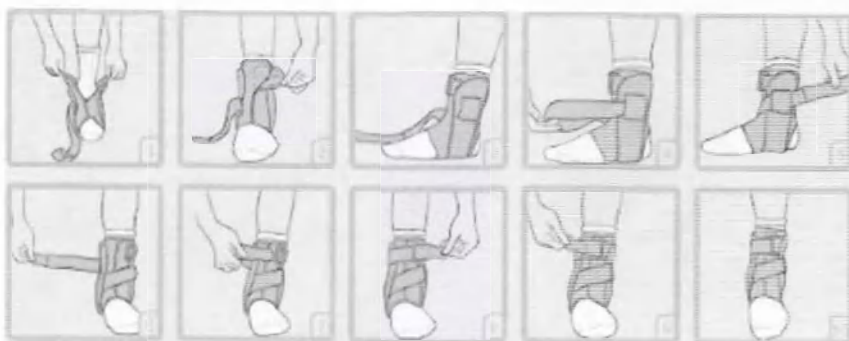

AM-SX-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-SX-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

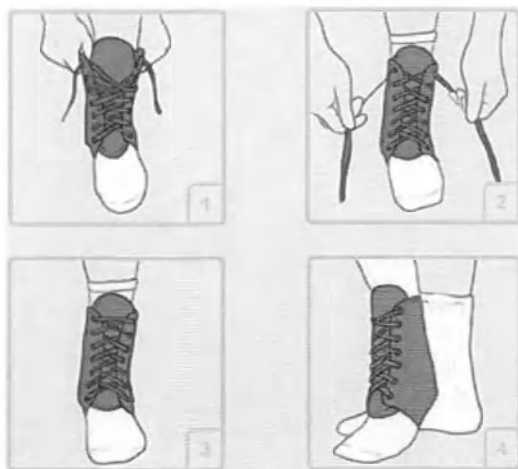

AM-SX-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



1) Наденьте скобу на ногу.



2) Застегните липучку сзади (1).



3) Проденьте ремень через петлю.



4) Закрепите ленту в указанном направлении и закрепите липучку (2)



5) Готовое изделие

AM-OSS-06




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



- 1) Наденьте скобу на ногу
- 2) Застегните верхнюю липучку (1).

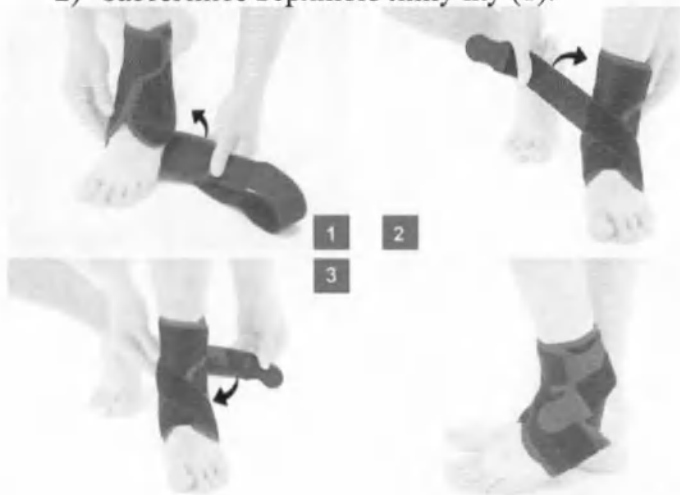

- 3) Пристегните ремень атл в нужном направлении (1,2,3) и застегнуть липучку
- 4) Готовое изделие.

AM-OSS-06




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

- 1) Наденьте ортез на ногу



2) Закрепите верхнюю липучку (1).

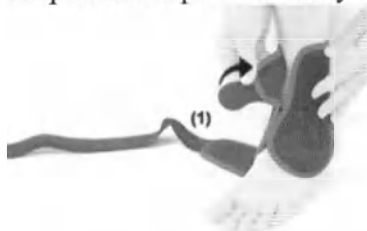

3) Пристегните ремень ATFL в правильном направлении (1,2,3) и закрепите липучкой.

4) Готовое изделие.



AM-OSS-06




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

5) Наденьте ортез на ногу



6) Закрепите верхнюю липучку (1).

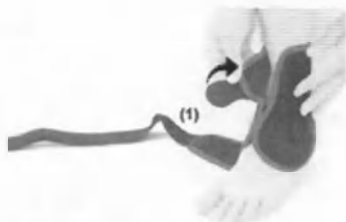

- 7) Пристегните ремень ATFL в правильном направлении (1,2,3) и закрепите липучкой.
- 8) Готовое изделие.



AM-OSS-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



- 1) Наденьте ортез на ногу
- 2) Застегнуть липучку (1)



- 3) Закрепите восьмеричные ремни в указанном направлении.



- 4) Застегнуть липучку (2)
- 5) Готовое изделие.

AM-OSS-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



- 1) Наденьте ортез на ногу.



- 2) Застегни липучку.



- 3) Готовое изделие.

AM-OSS-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.





Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

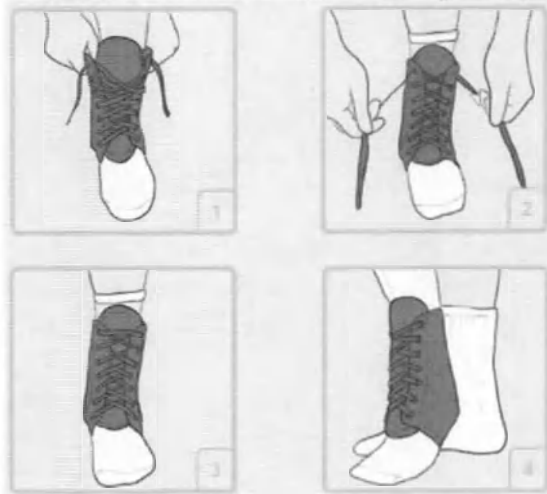

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



1) Наденьте ортез на ногу.



2) Застегните липучку (1) и (2)



- 3) Закрепите восьмеричные прижимные ремни (3) и (4).
- 4) Готовое изделие.

AM-OSS-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-OSS-14



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

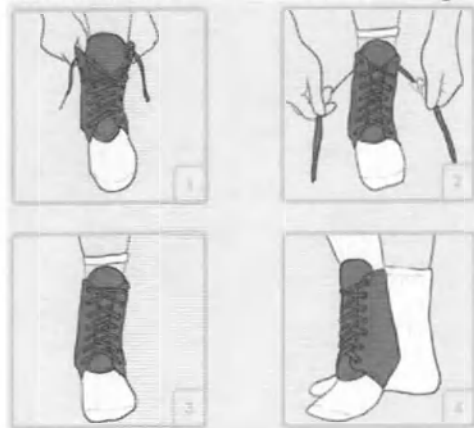

AM-OSS-15



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-16



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-OSS-17



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

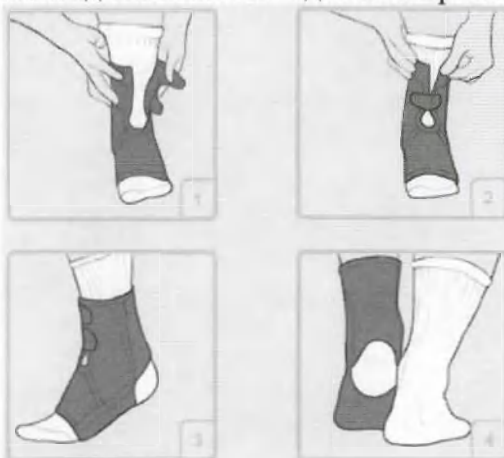

AM-OSS-18



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-19



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSS-20



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



EB-SS



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



U-SS



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



U-SS-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OP-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



- 1) Положите ногу на ортез таким образом, чтобы сустав МТР находился в отверстии алюминиевой рейки.
- 2) Застегните липучку (1) в соответствии с указанным направлением.



- 3) Закрепите липучку (2) в соответствии с указанным направлением.

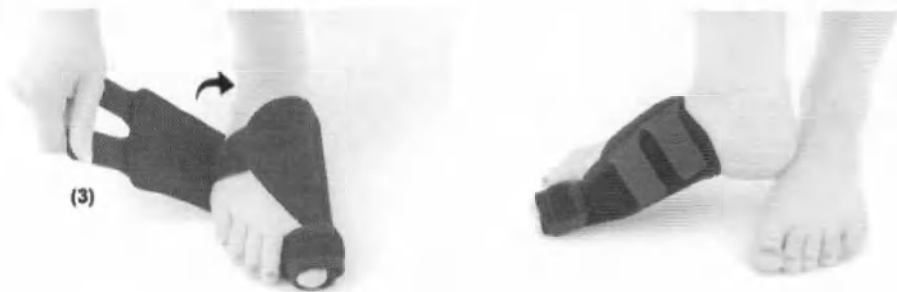

- 4) Застегните липучку (3) в соответствии с указанным направлением.
- 5) Готовое изделие

4ARMY-PU-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



4ARMY-SS-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.






Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

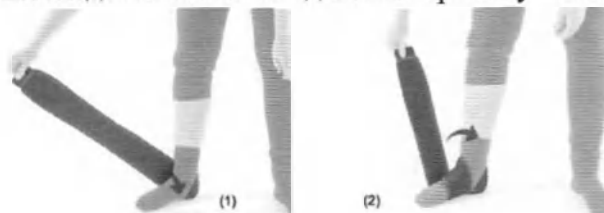

- 1) Наденьте скобу на ногу и закрепите в соответствии с порядком (1) (2) (3).



- 2) Застегните липучку




- 3) Готовое изделие.

AM-OSS-23



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

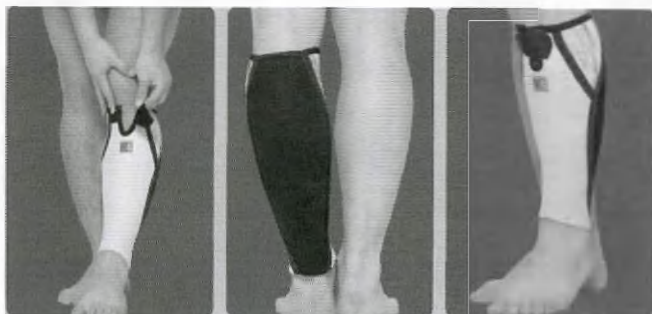

AM-SB-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-SB-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AS-PU-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

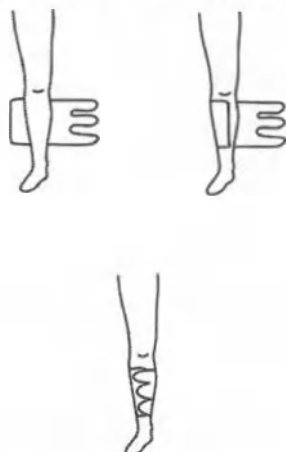

AS-PU-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AS-PU-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AS-U-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AS-PU



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AS-PU-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



R4M-PU



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




U-PU



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

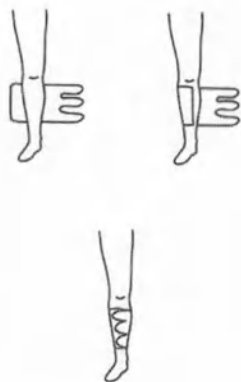


AM-OSS-21/CCA




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

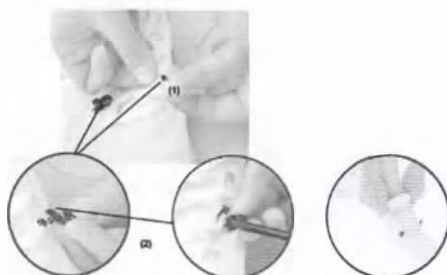

1) Перед тем, как надеть обувь, поместите крепежные гайки в отверстия для шнурков (1) и прикрутите крючок с винтом к гайке (2).


Внимание! Чем ближе к плюсне вы прикрепляете гайки, тем прочнее высота стопы вы получите.

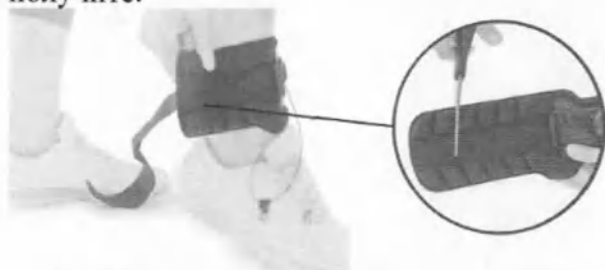

2) Наденьте скобу на ногу и при необходимости отрежьте ее лишнюю длину



3) Пропустите ленту в указанном направлении (1), пропустите его через пряжку (2) и закрепите на липучке (3).

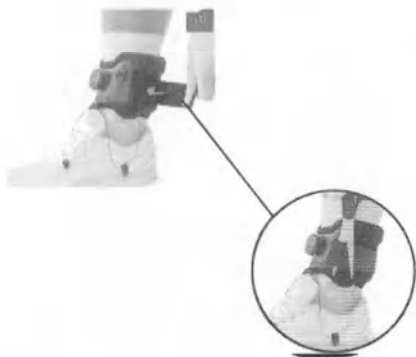

4) Отрежьте лишнюю длину полосы.



5) Прикрепите петлю ортеза к крючкам, установленным в обуви.



6) Задайте соответствующую силу натяжения для системы Воа.




7) Готовое изделие.

PCO-L-11



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

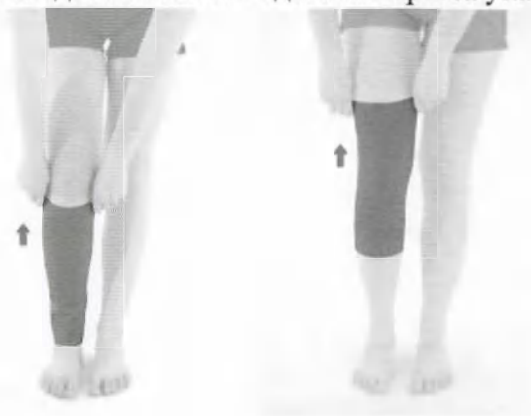

PCO-L-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-OSS-25



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




1) Наденьте скобу на ногу.



2) Zapnij rzepy według wskazanej numeracji (1)



(2) (3).

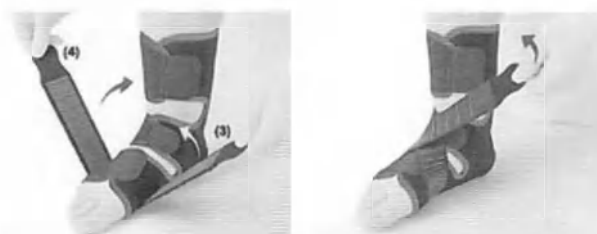

3) Закрепите восьмеричные тяговые ремни (3) и (4). Более сильное натяжение ремней, приведет к более сильному фасад передней части стопы.



4) Готовое изделие.

ТВ-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-KDS-AM/1RE



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.




AM-KD-AM/1RE-ACL

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

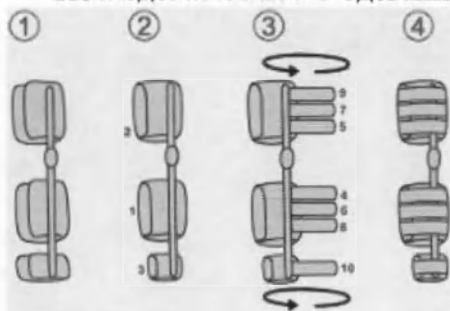

AM-KDS-AM/1RE-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-KDS-AM/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-KDS-AM/2R-02




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

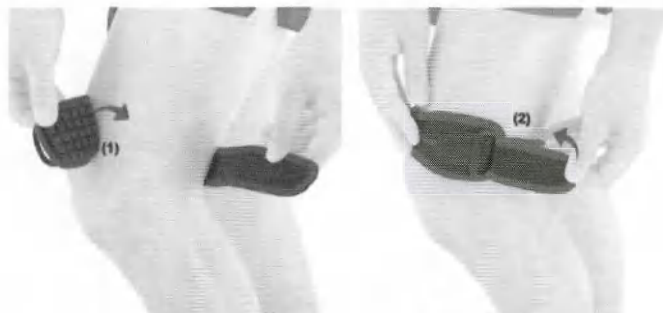

- 1) Поместите силиконовую пелоту на подвздошно-большеберцовую полосу (1), пропустите ремень через пряжку и застегните липучку (2).




- 2) Готовое изделие.

AS-KX-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

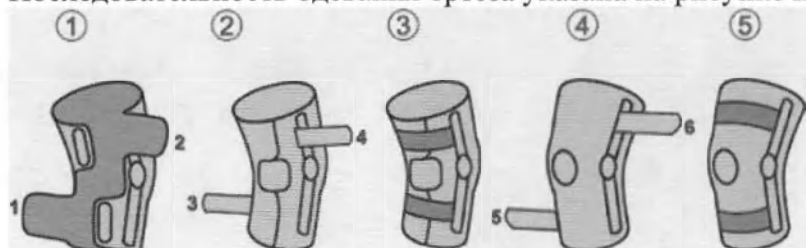


AS-KX-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

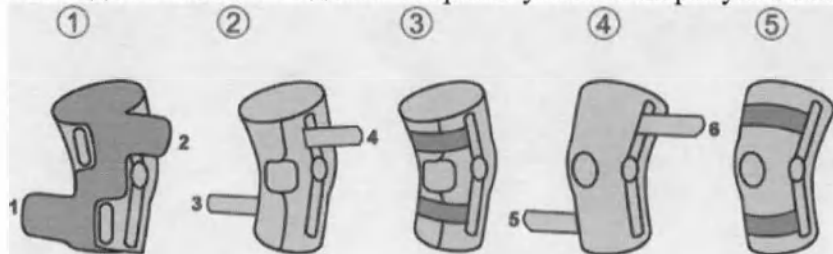


AS-KX-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

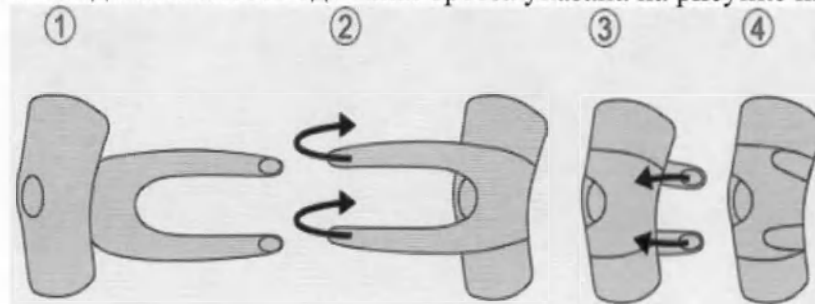


AS-KX-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

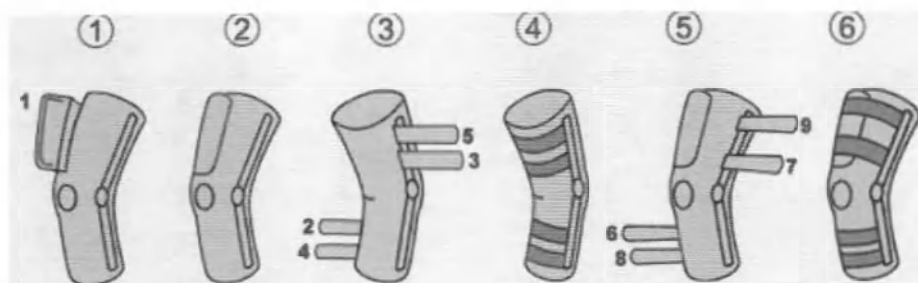


AS-KX-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

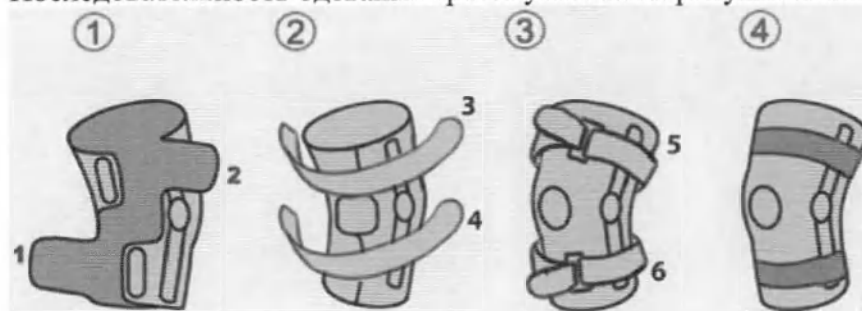


AS-KX-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

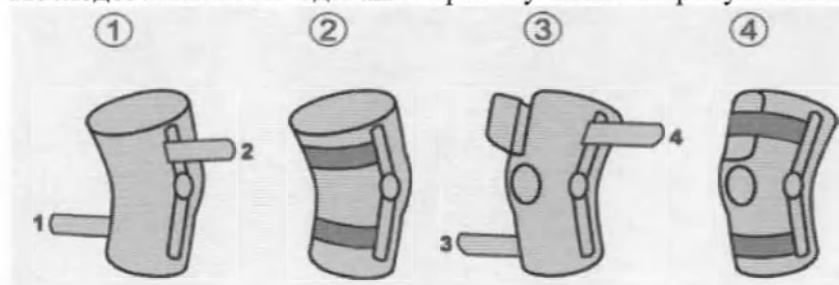


AS-KX-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

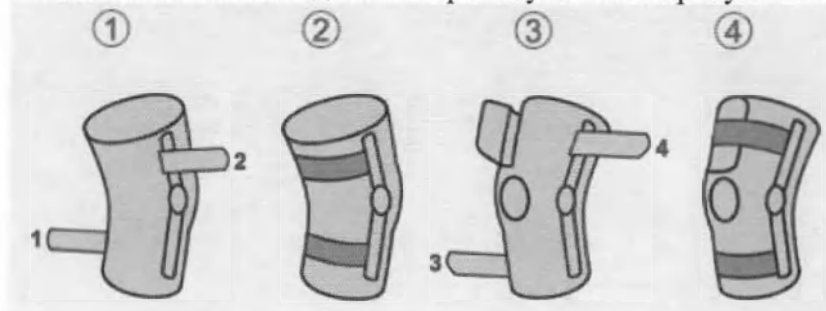


AS-KX-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

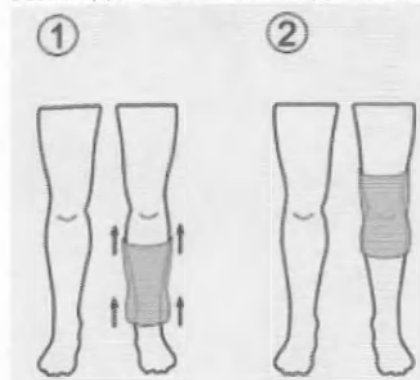


U-SK



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

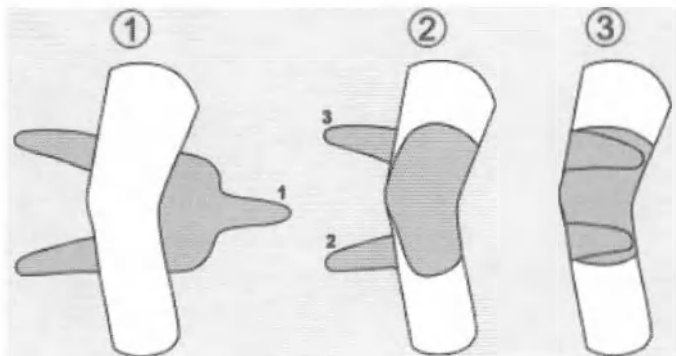


AM-OSK-Z



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

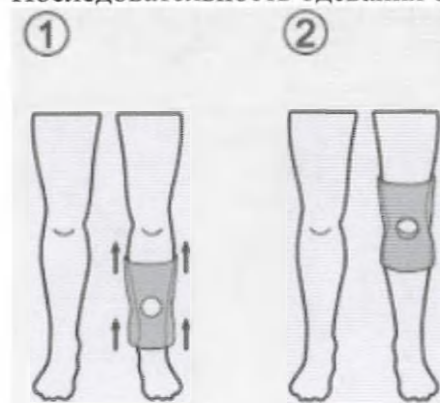


AM-OSK-Z/P



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

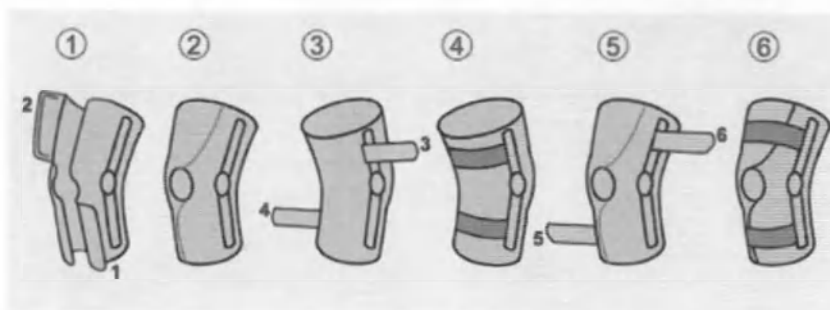


AM-OSK-Z/S



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

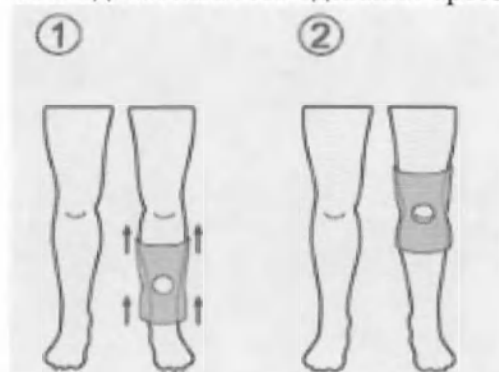


AM-OSK-Z/S-P



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

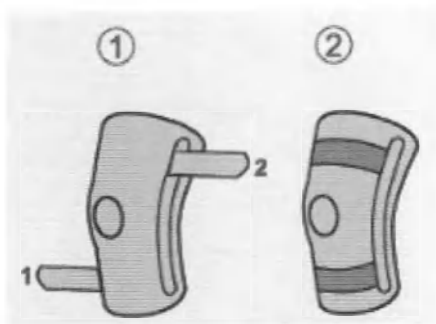


AM-OSK-Z/S-X



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

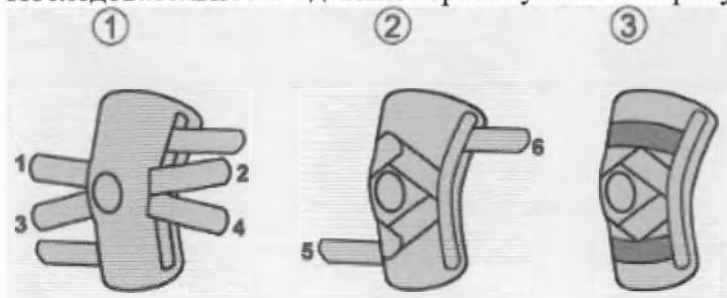

R4M-SK



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




R4M-SK/F



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

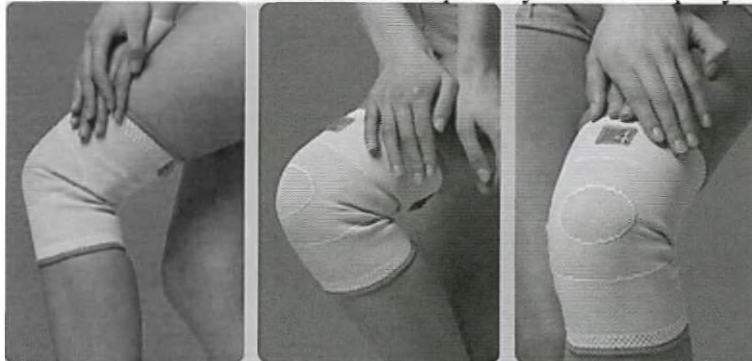


AS-SK



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

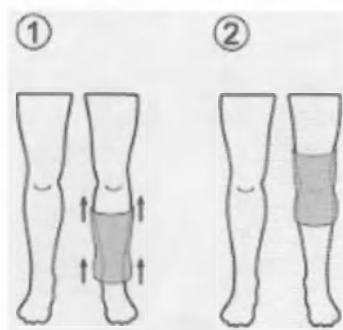


AS-SK-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

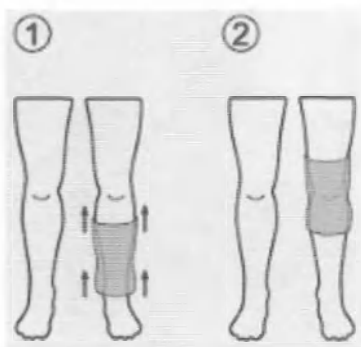


AS-SK-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

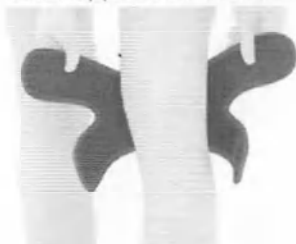

1) Прикрепите скобу к ноге.



2) Застегните липучку (1) и (2)

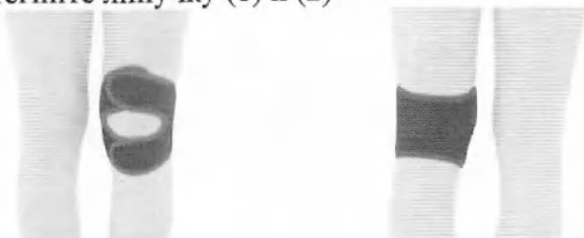


3) Готовое изделие



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

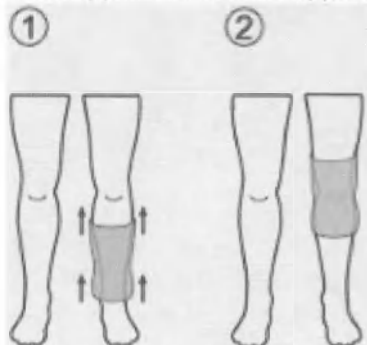


Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

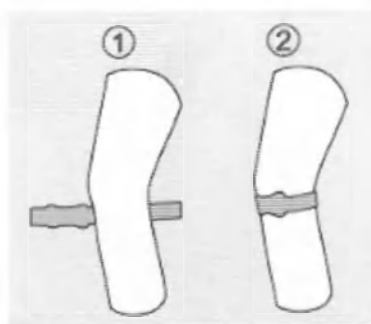


EB-P/RZ



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

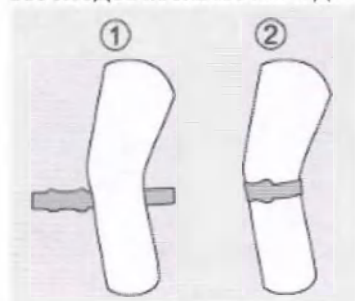


U-SK-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

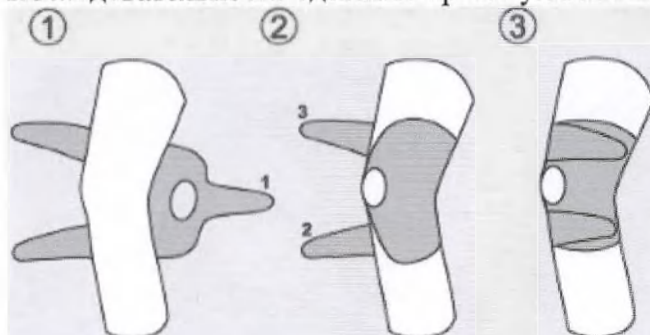


U-SK-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

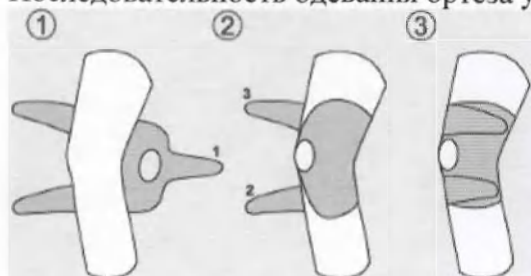


AM-KDX-02




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

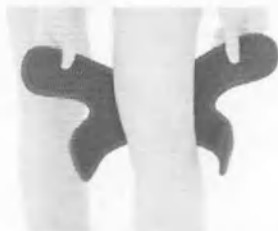

4) Прикрепите скобу к ноге.

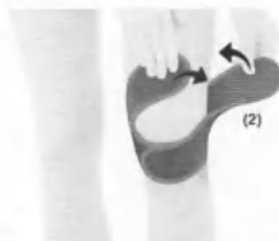

5) Застегните липучку (1) и (2)




6) Готовое изделие




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

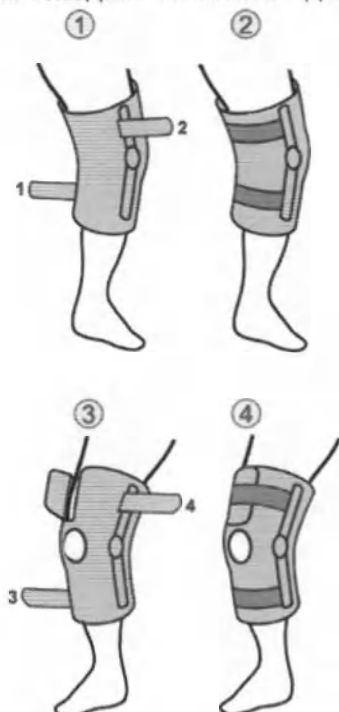

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

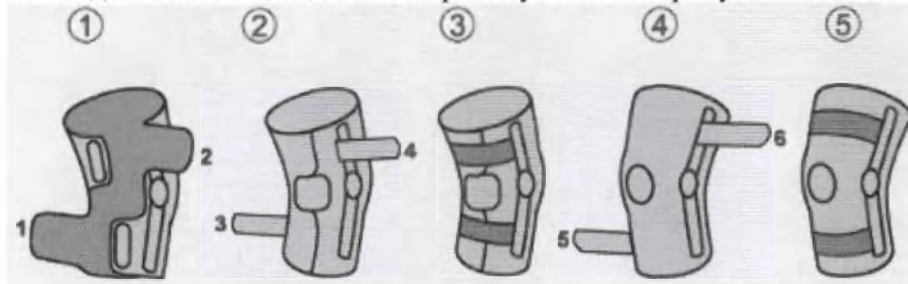


RAPTOR/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

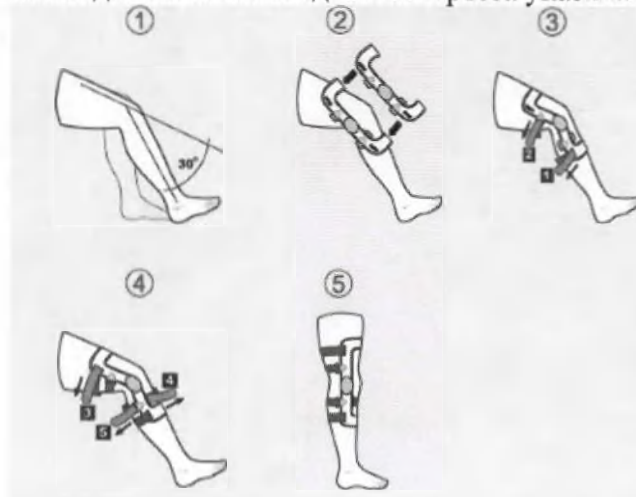


EB-SK/P



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

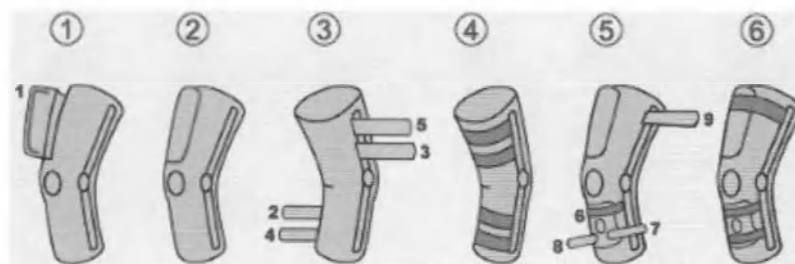


IB-SK/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

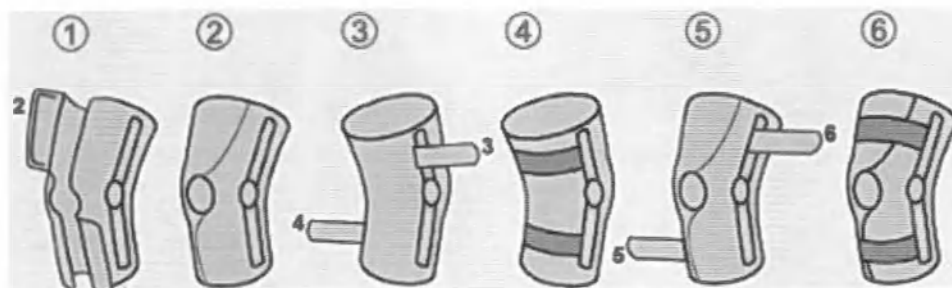


IB-SK/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

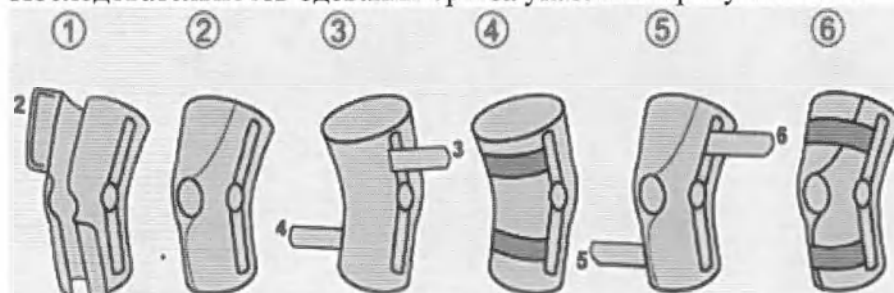


IB-SKL/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

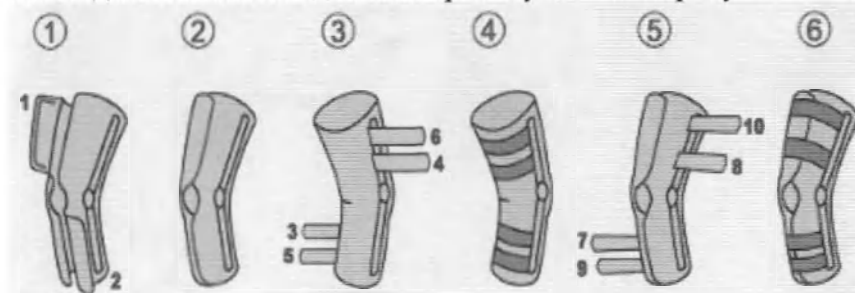

IB-SKL/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




IB-SKL/3



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

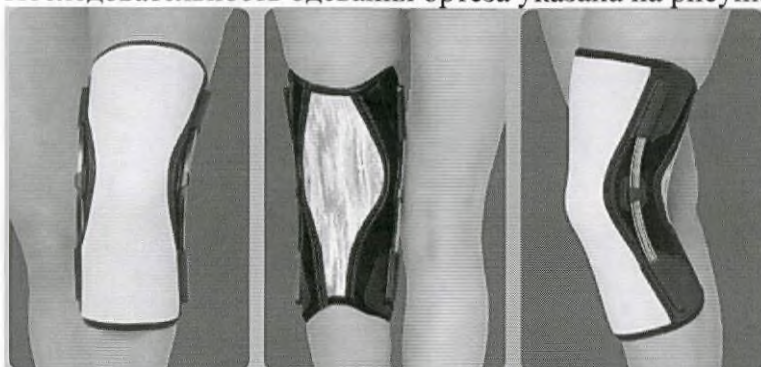


ATTACK 1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

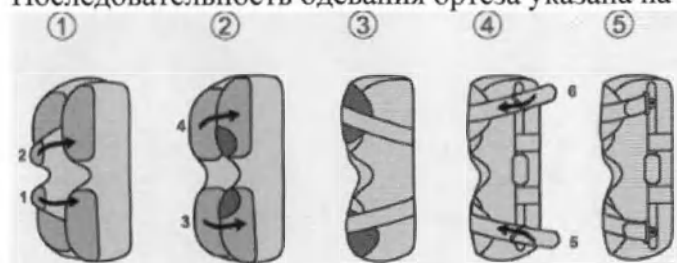


ATTACK 2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

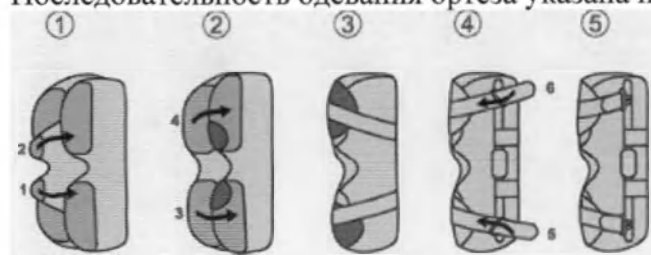


ZEUS



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

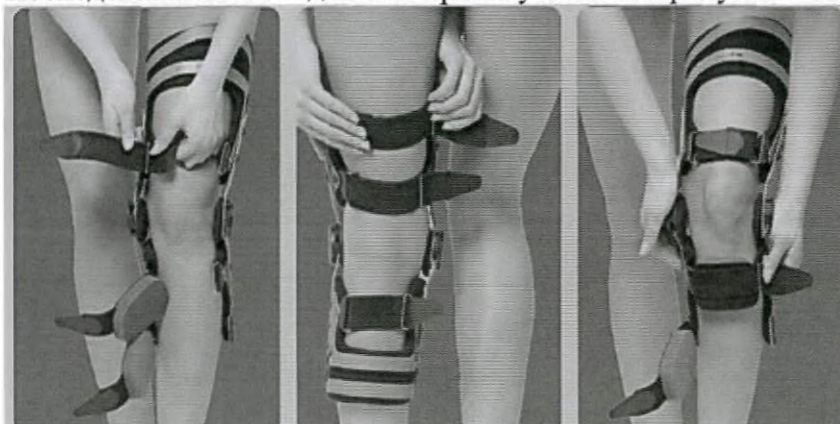




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

OKD-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

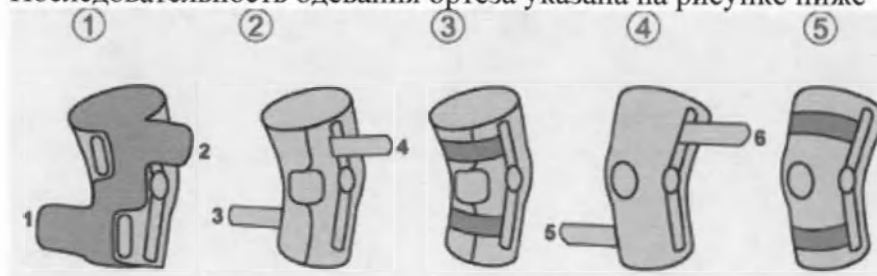


OKD-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

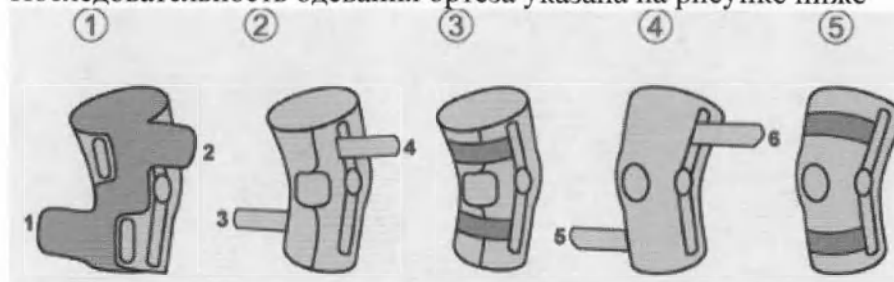


OKD-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

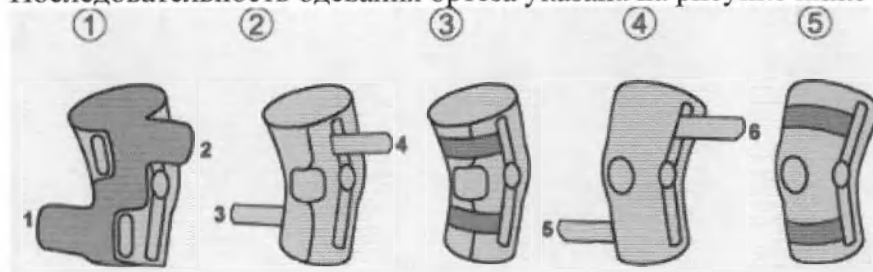


OKD-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

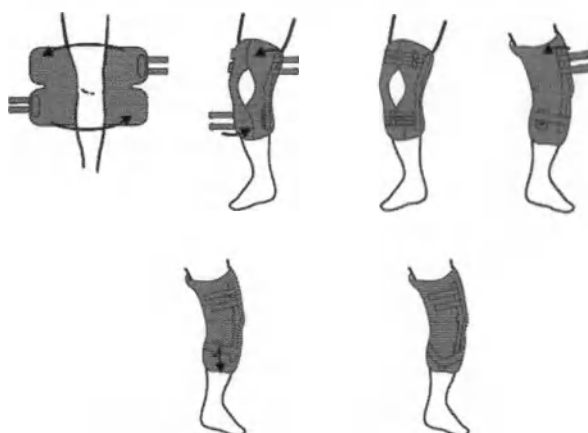


OKD-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

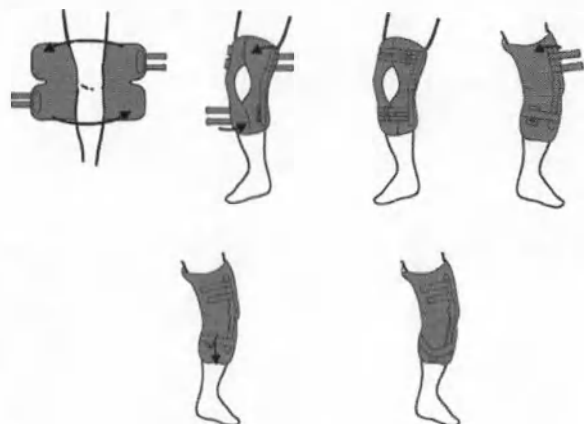


1. EB-SK/F Ортез на коленный сустав



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

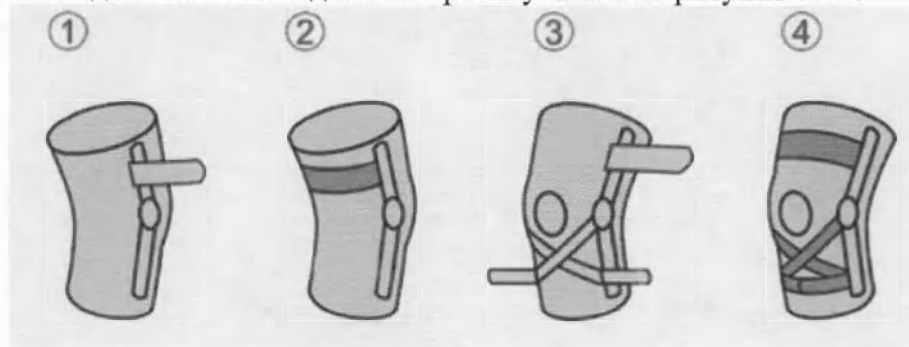


SPARTAN



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

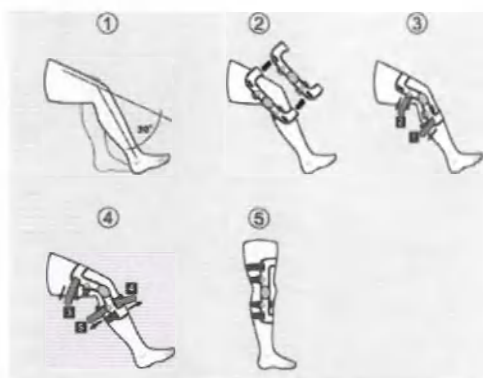

OKD-Z/F



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Прикрепите ортез к ноге таким образом, чтобы коленная чашечка находилась в перианальном отверстии




- 2) Застегните липучку в указанном порядке.
- 3) Готовое изделие

RAPTOR/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

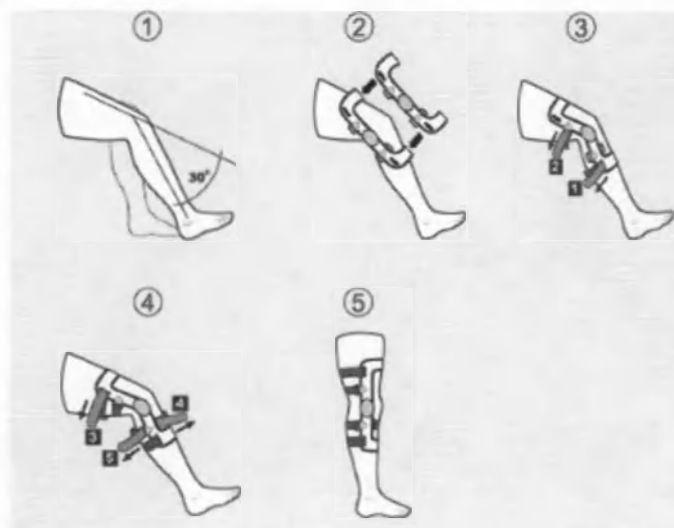

ATOM/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-OSK-O/1R-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

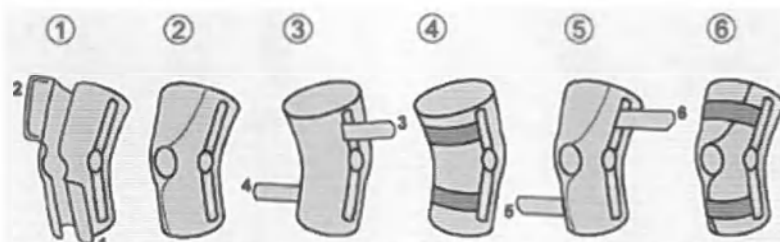


AM-OSK-Z/1R-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

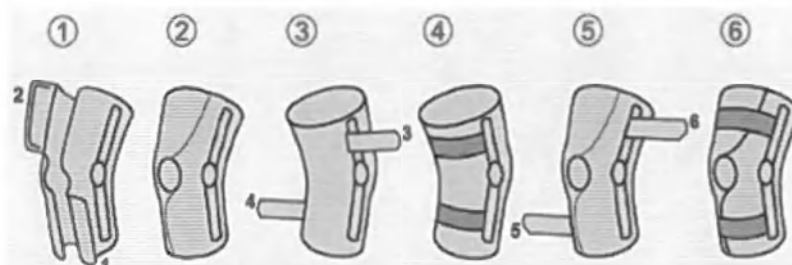


AM-OSK-ZL/1R-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

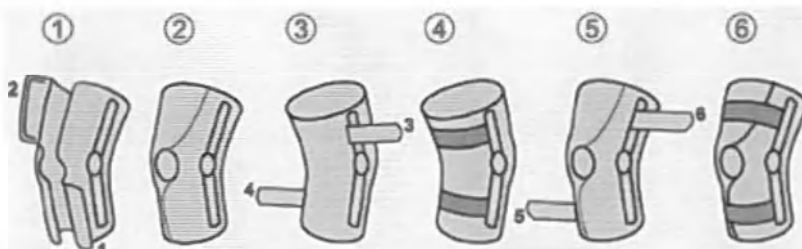

AM-OSK-OL/1R-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-KD-AM/1R-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

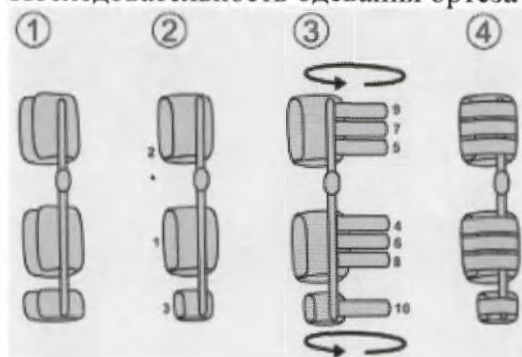

OKD-01




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

OKD-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

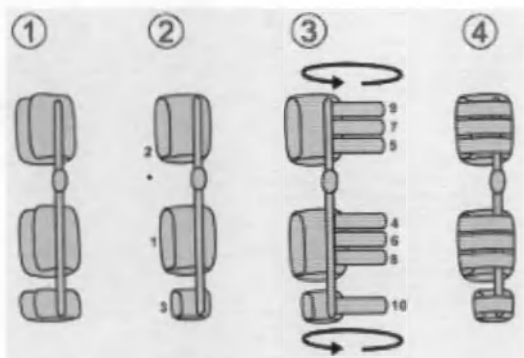


ATOM/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

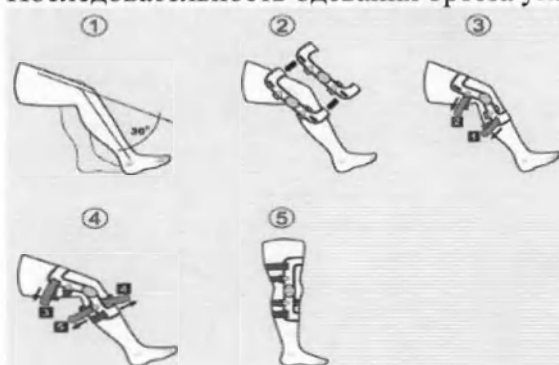


RAPTOR/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

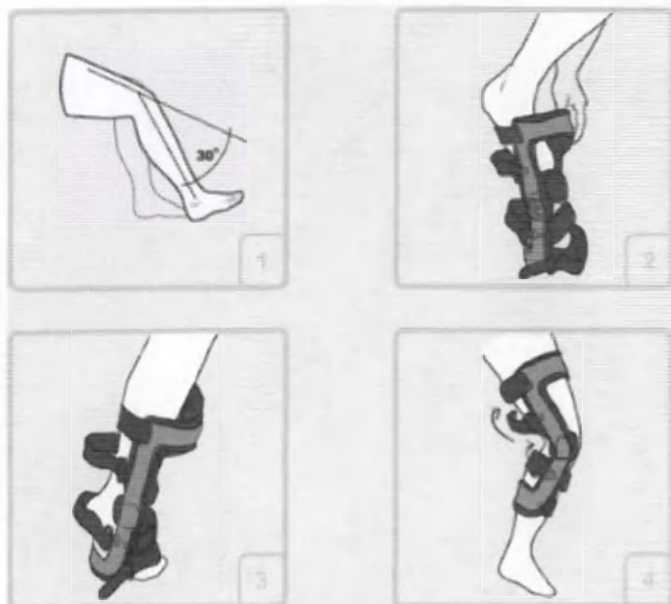


EB-SK/A



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

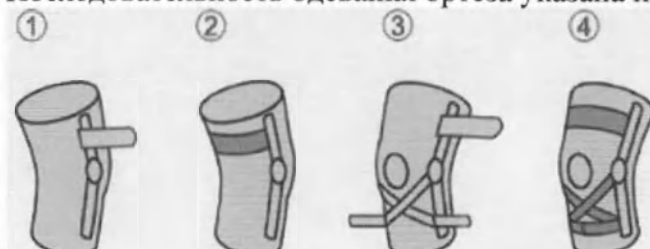


AM-OSK-Z/S-A



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

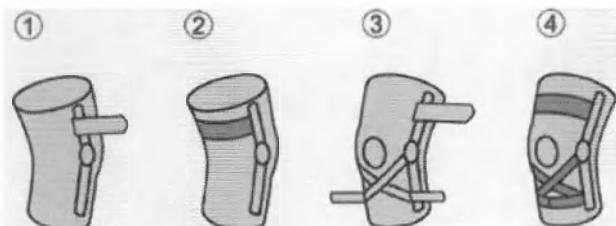


AM-OSK-Z/S-A (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

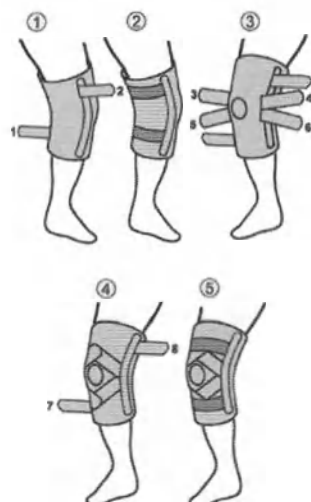


AM-OSK-ZJ/3



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

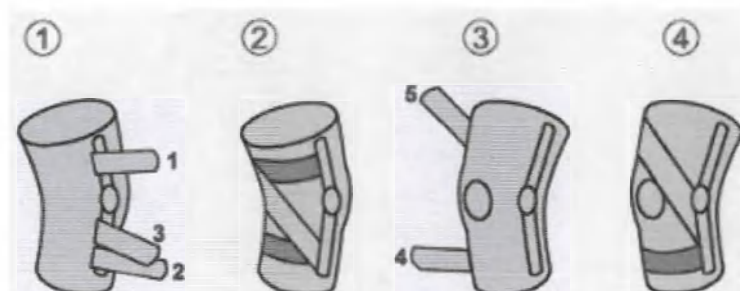

EB-SK/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




EB-SKL/3



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

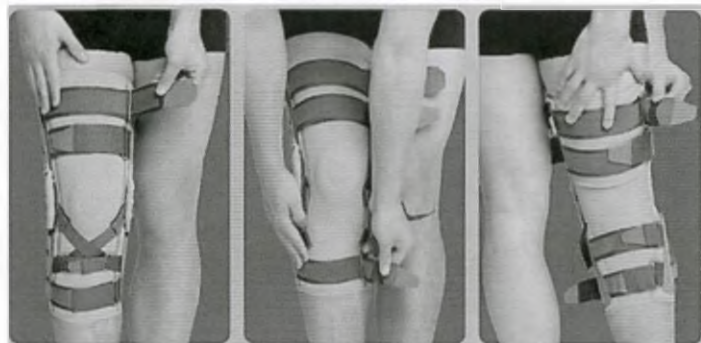


EB-SKL/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

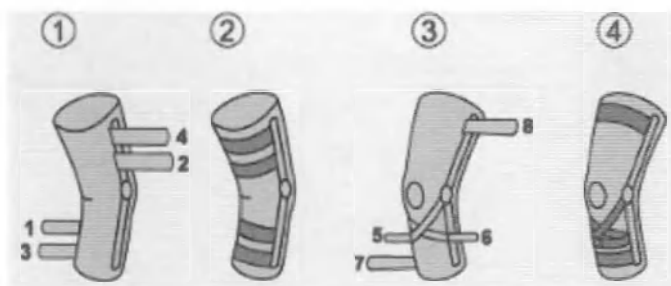


EB-SKL/2RA-ACL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

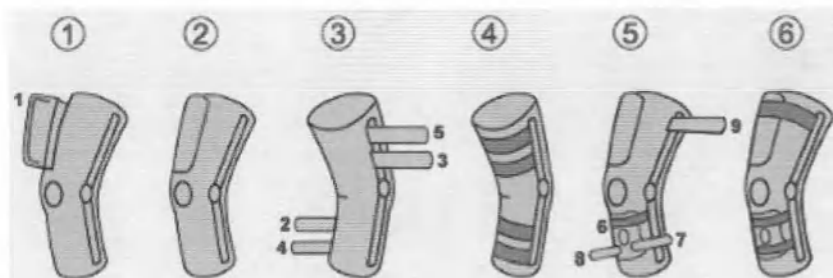


AM-KD-AM/1RE



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

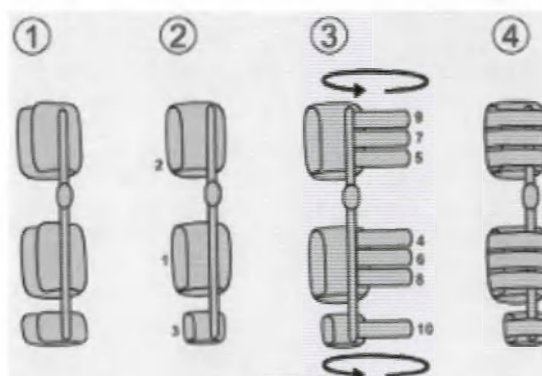


AM-KD-AM/1RE-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

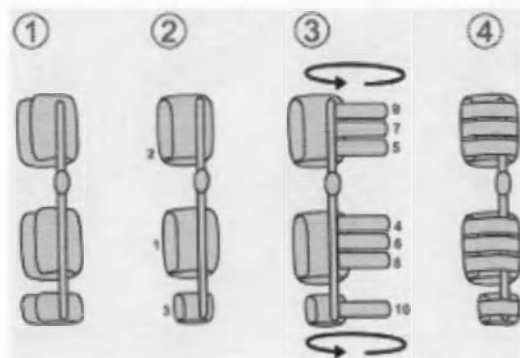

AM-KD-AM/2RA-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-KD-AM/1RE-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AS-SK/A



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

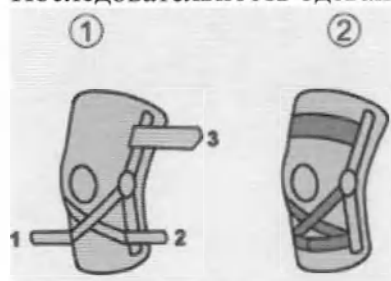


EB-SK/2



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

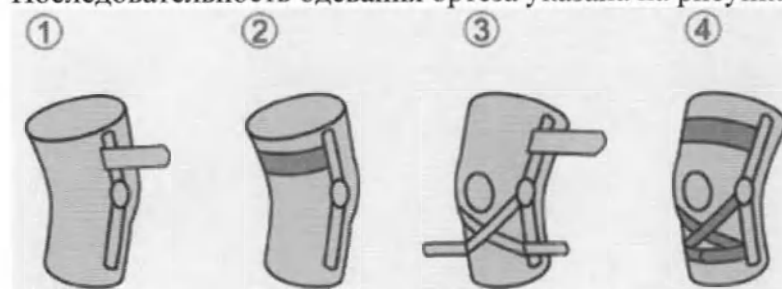


EB-SK/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

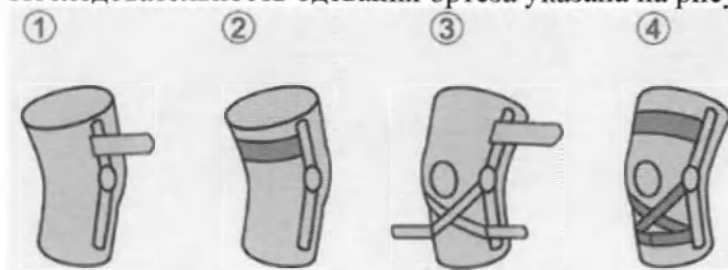


AM-OSK-Z/2RA-OR



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

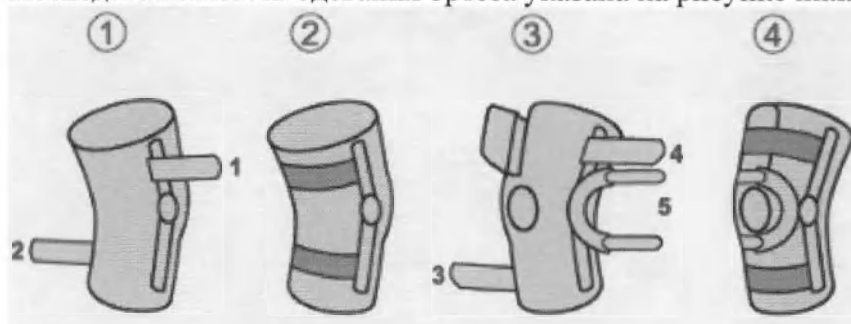

AM-KD-AM/3-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




EB-SKL/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

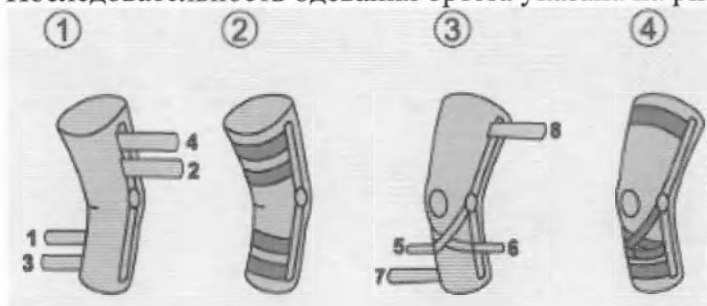

AM-OSK-ZL/2RA-ACL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




1) Ослабьте систему BOA, прежде чем надевать ортопедию



2) Наденьте скобу на ногу и подтяните вверх так, чтобы коленная чашечка оказалась в перистальтическом отверстии.



3) Пристегните ремни на липучке (1) (2) (3) (4) (5) (6) в соответствии с указанным порядком

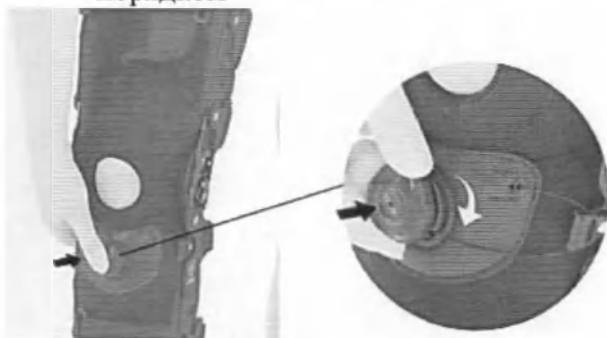

4) Установите соответствующее сжатие для системы Boa.
Внимание! Чем сильнее вы натягиваете тросы, тем больше вы получите заднюю часть перевод голени



5) Готовое изделие.

AM-KD-AM/2R-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-KD-DAM/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

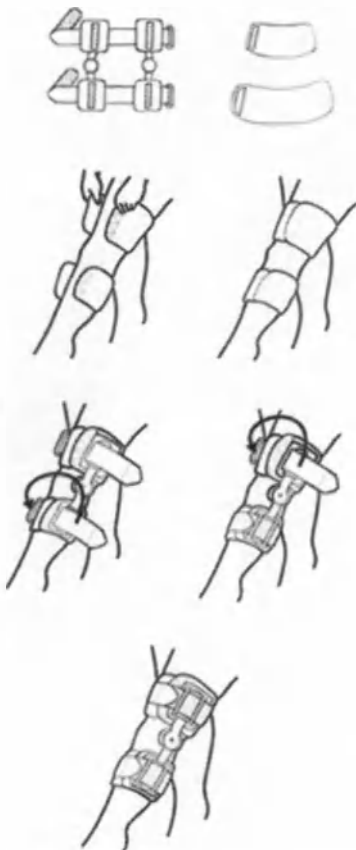


AM-KDS-AJ/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

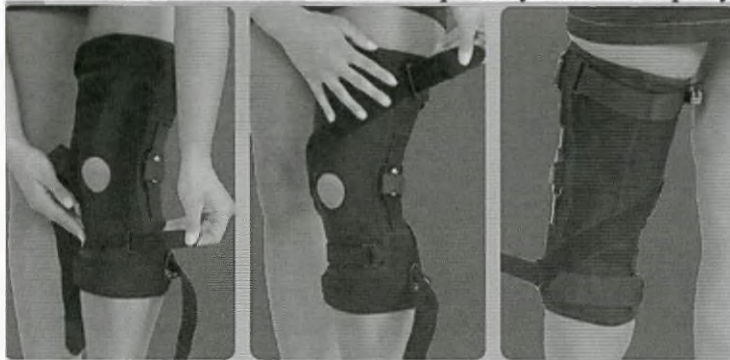


AM-KD-AM/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

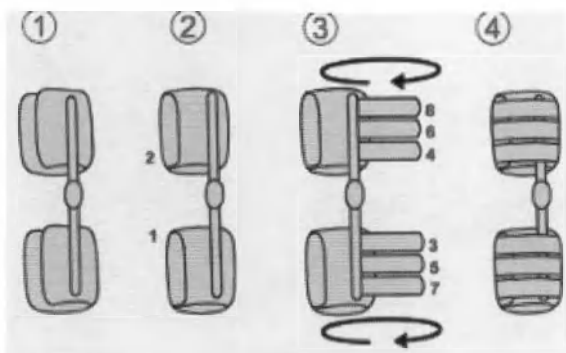


AM-KD-AM/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

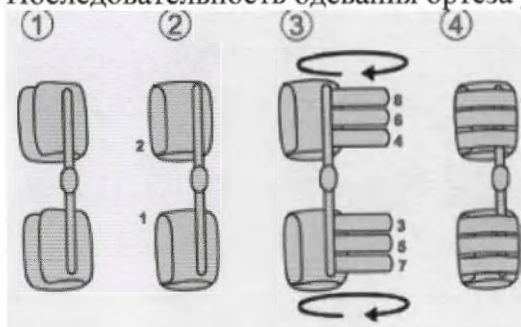


AM-KD-AM/2R-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

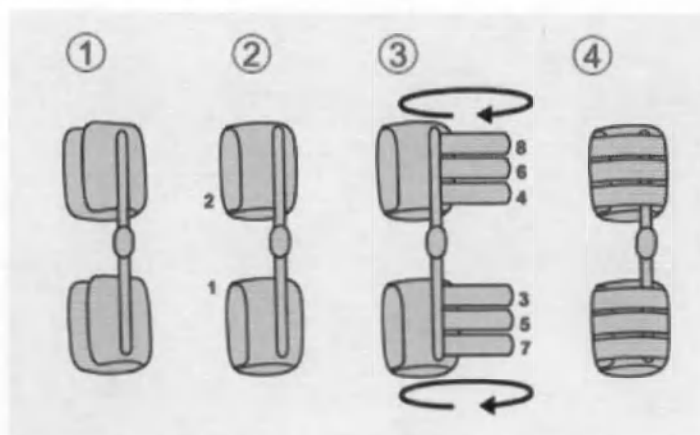


AM-TUD-KD



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

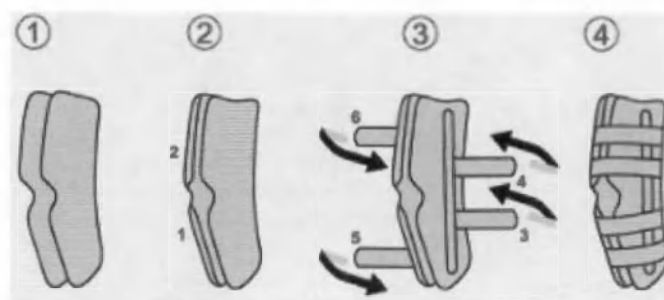


AM-TUD-KD (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

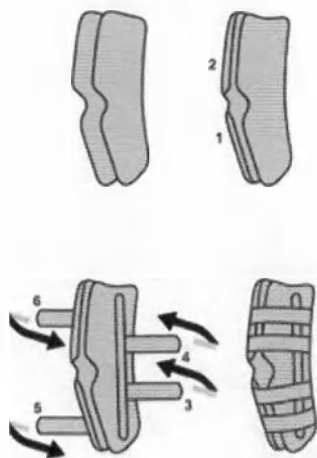


AM-TUD-KD-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

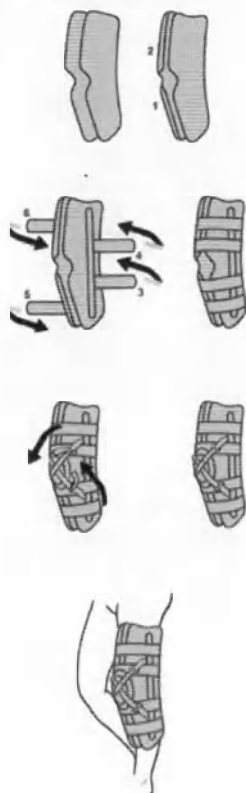


AM-TUD-KD-02 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

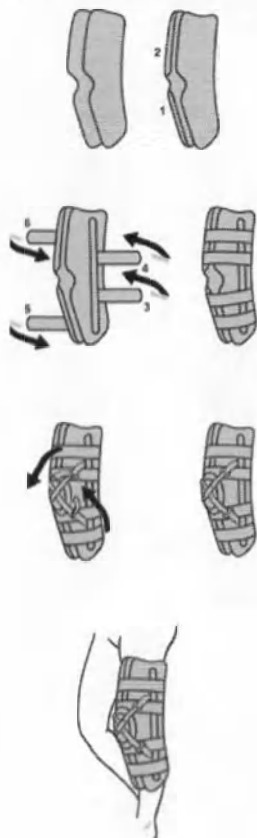


AM-OSK-Z/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

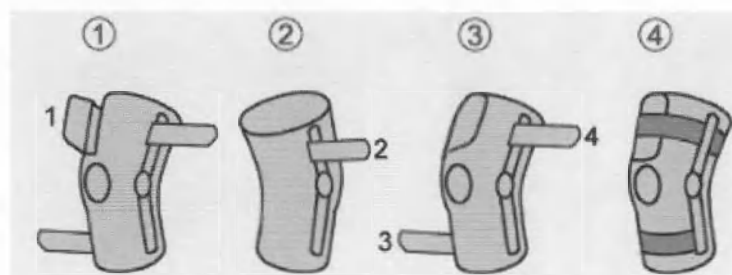


AM-OSK-O/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

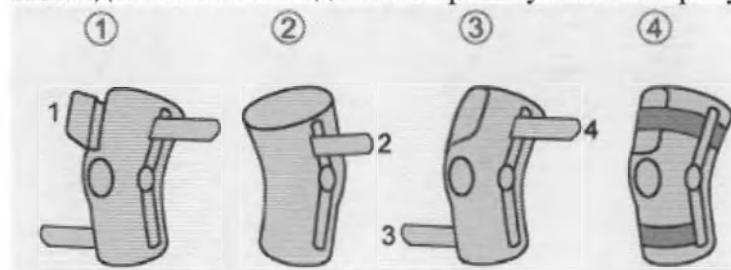


AM-OSK-Z/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

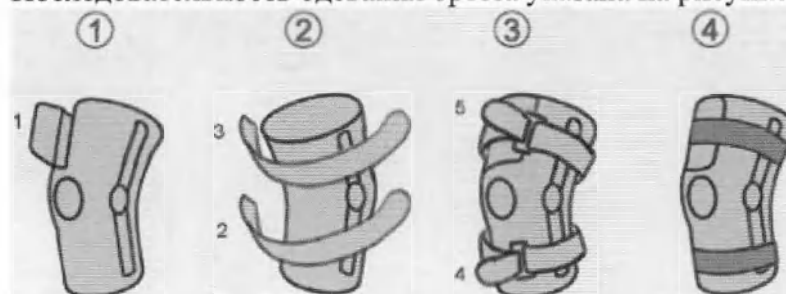


AM-OSK-Z/2R-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

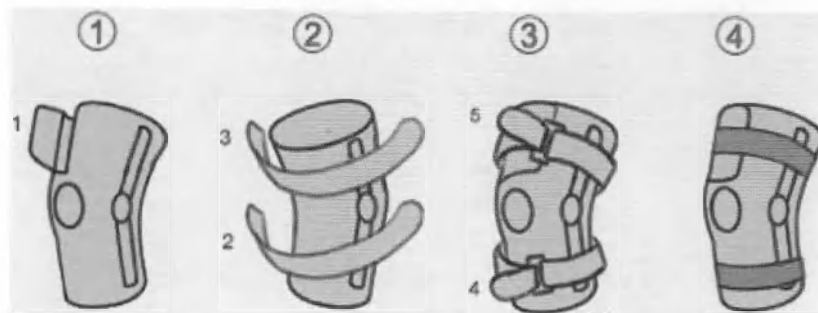


AM-OSK-O/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

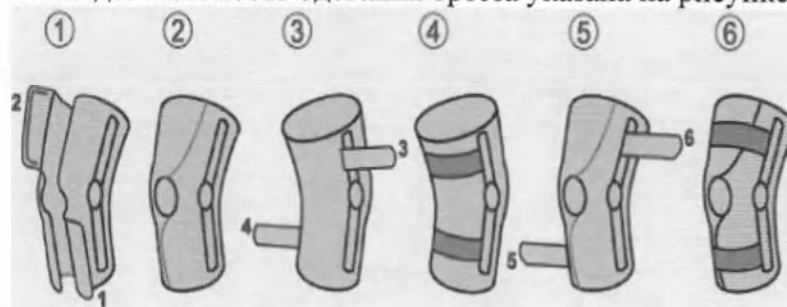


AM-OSK-ZJ/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

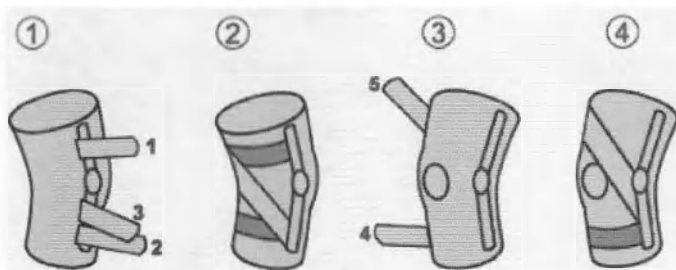


AM-OSK-Z/1



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

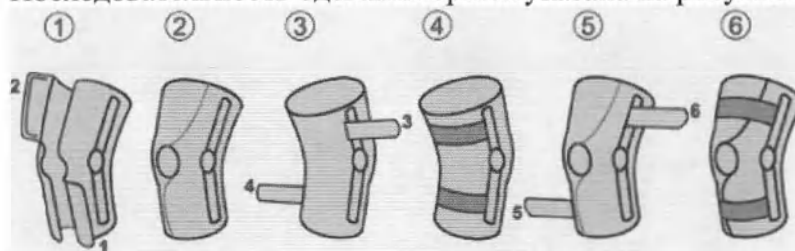


AM-OSK-O/1



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

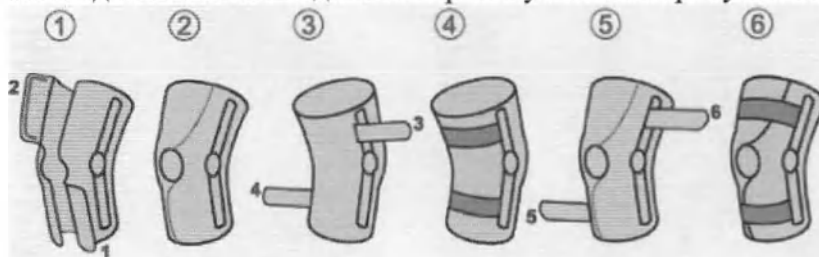


AM-OSK-Z/2



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

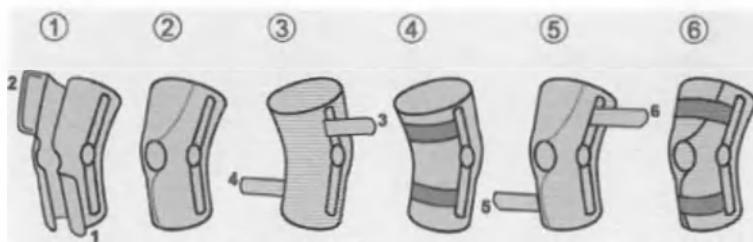


AM-OSK-Z/2-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

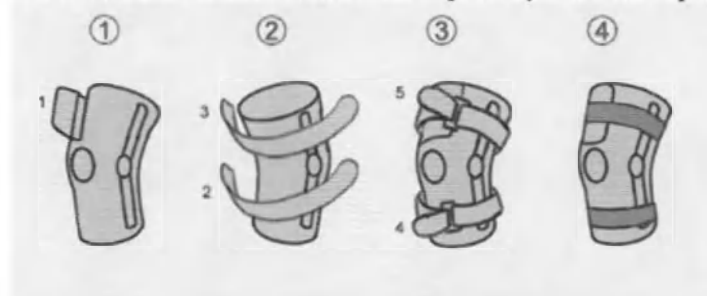


AM-OSK-O/2



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

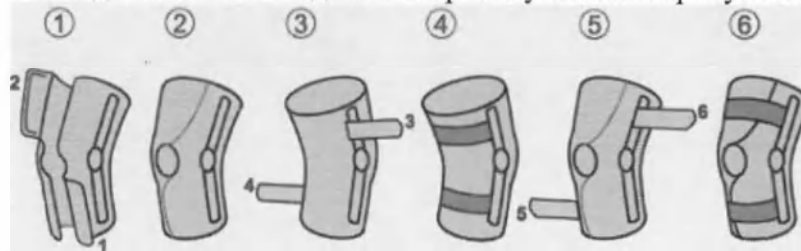


AM-OSK-ZL/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

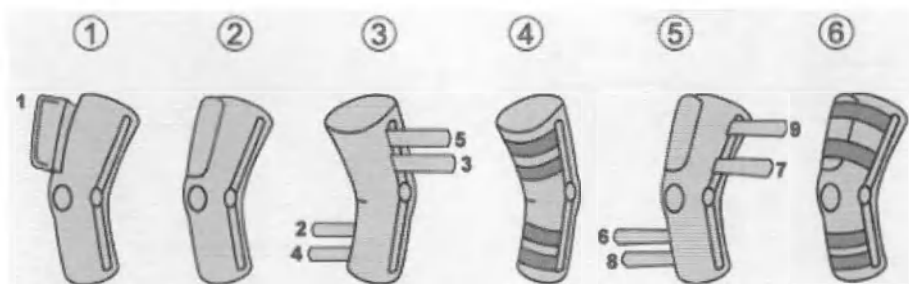


AM-OSK-OL/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

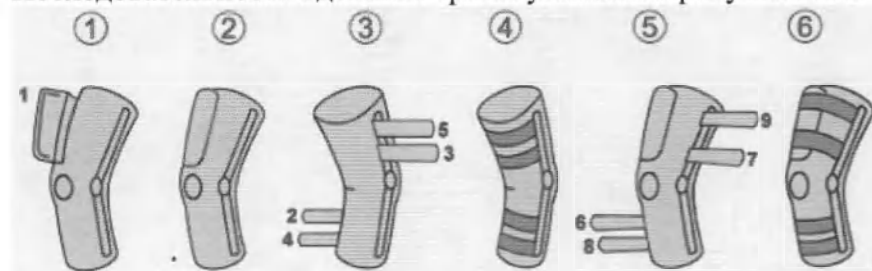


AM-OSK-ZL/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

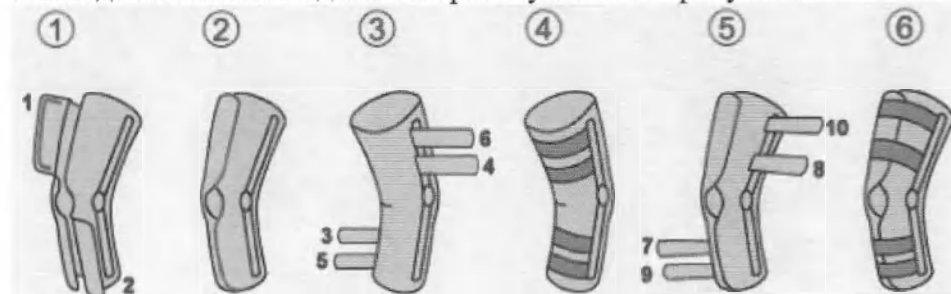


AM-OSK-ZL/2R-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

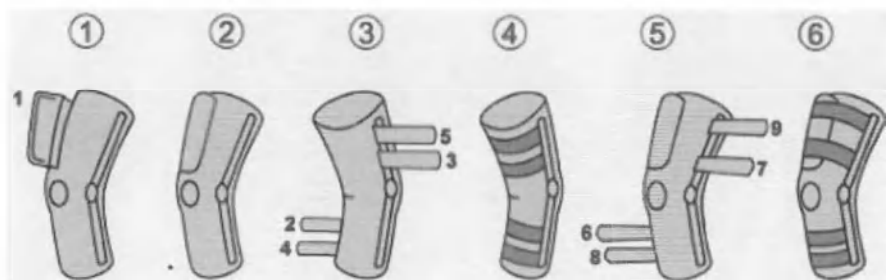

AM-OSK-OL/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-OSK-ZL/2



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

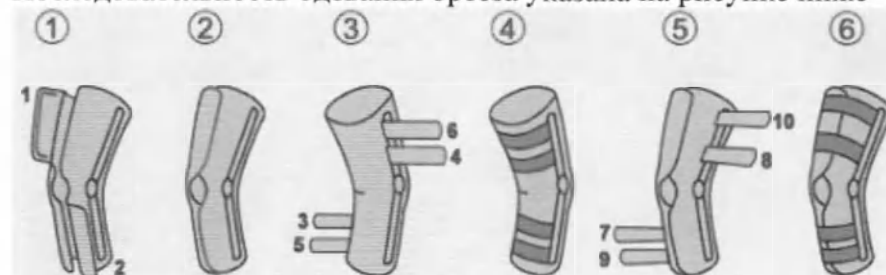


AM-OSK-ZL/2-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

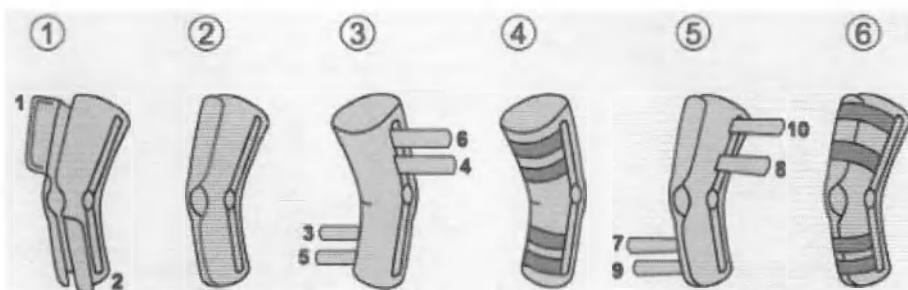


AM-OSK-Z/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

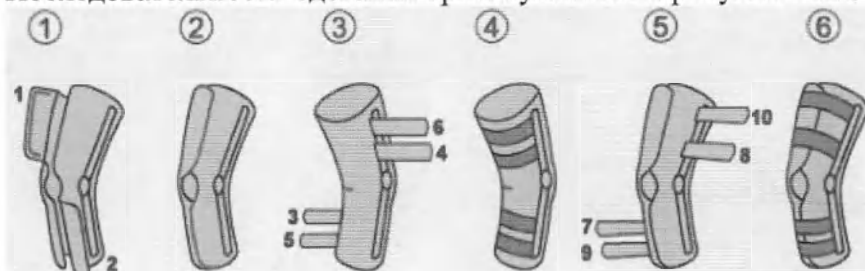


AM-OSK-Z/2RA-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

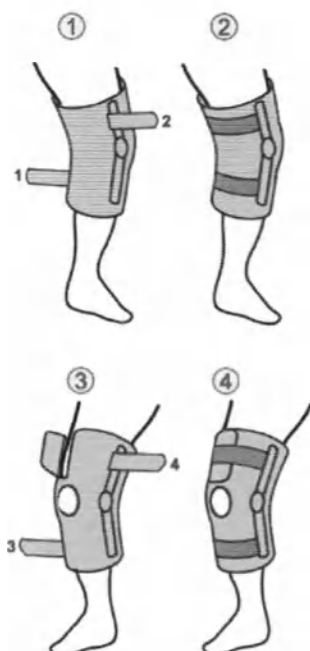


AM-OSK-O/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

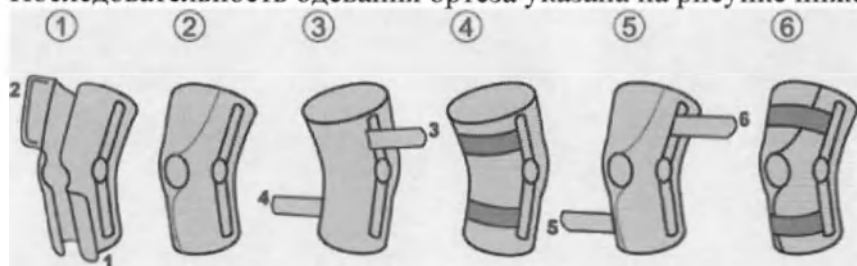


AM-OSK-ZJ/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

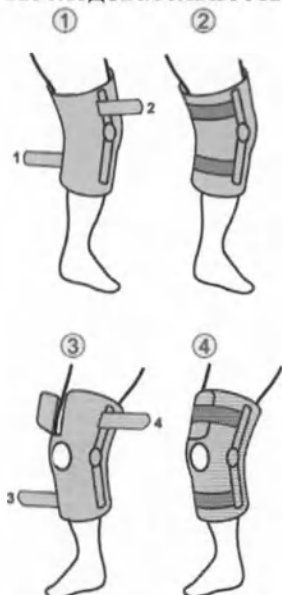


AS-SKL/F




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

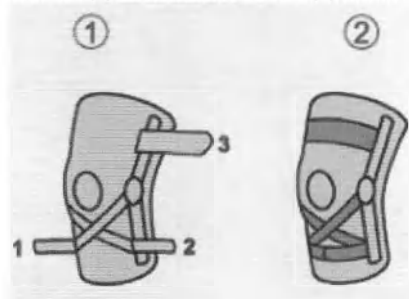


AM-OSK-ZL/2RA

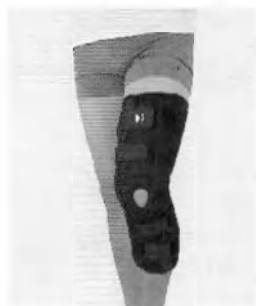

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

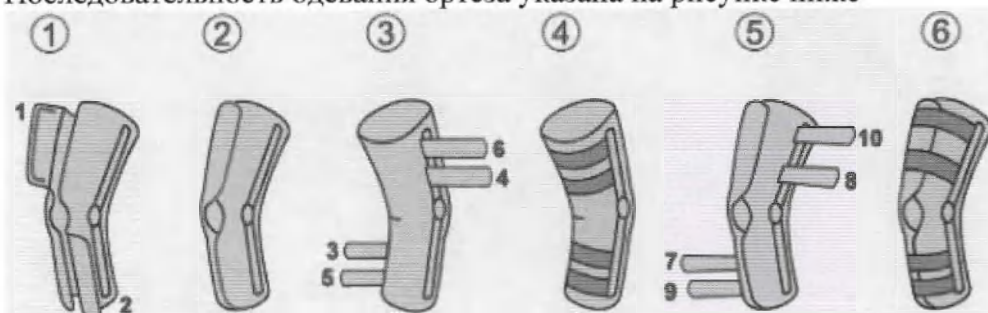


AM-OSK-ZL/2RA-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

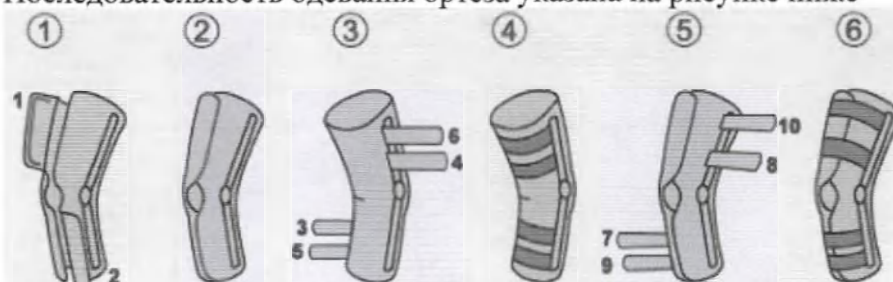


AM-OSK-OL/2RA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

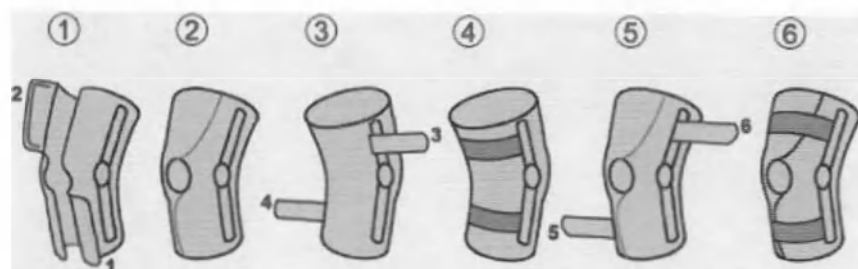


AM-OP-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

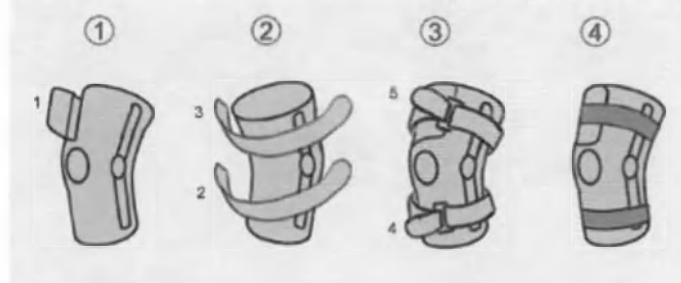


AM-OP-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

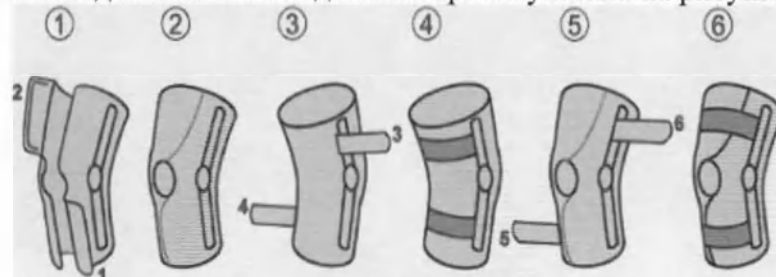


4ARMY-SK-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

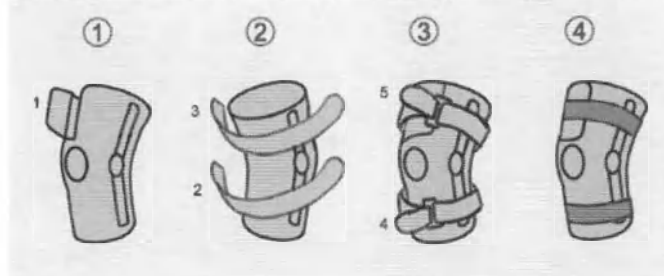


4ARMY-SK-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

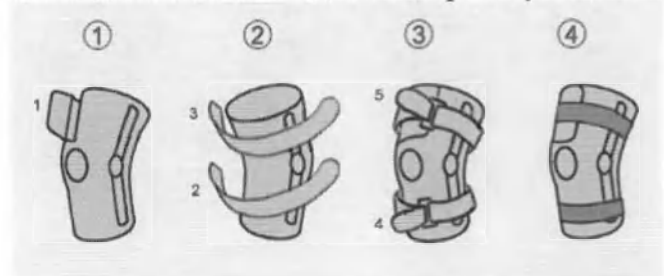


4ARMY-SK-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

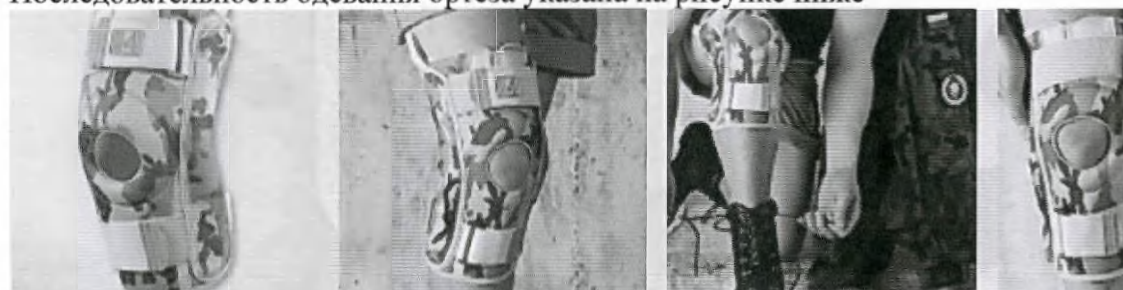

4ARMY-SK-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-SK-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

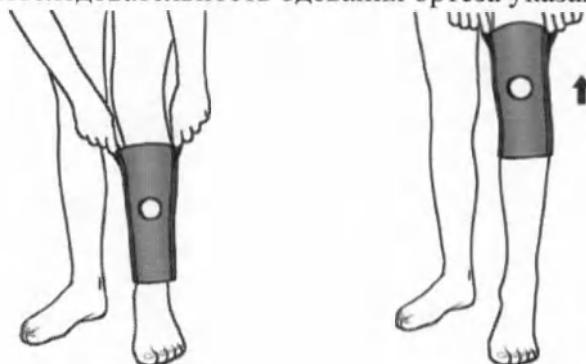

4ARMY-SK-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-SK-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

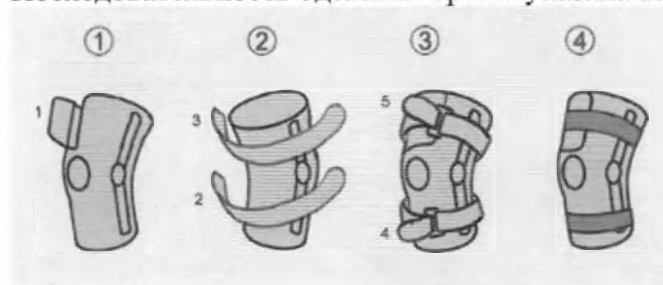

4ARMY-SK-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SK-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-SK-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

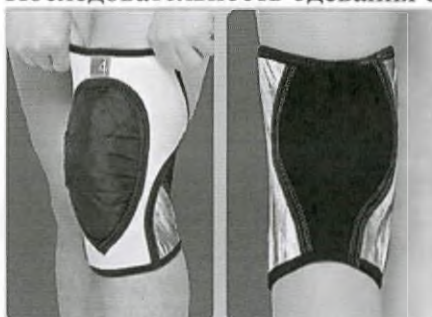

4ARMY-SB-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-SB-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

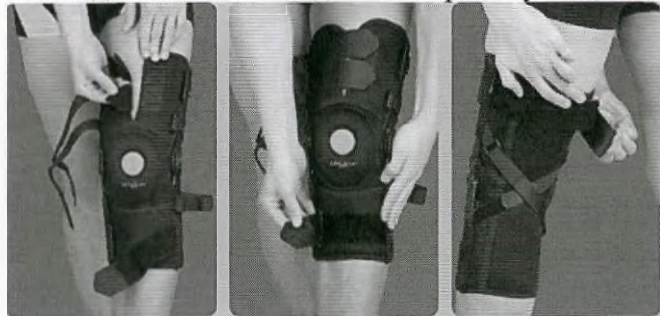

4ARMY-SB-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-U-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

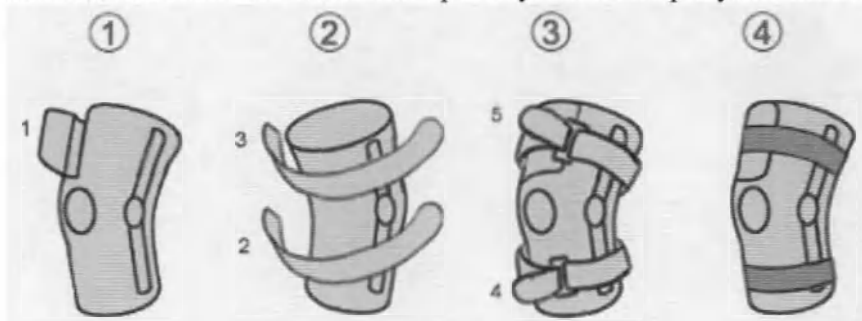


4ARMY-U-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

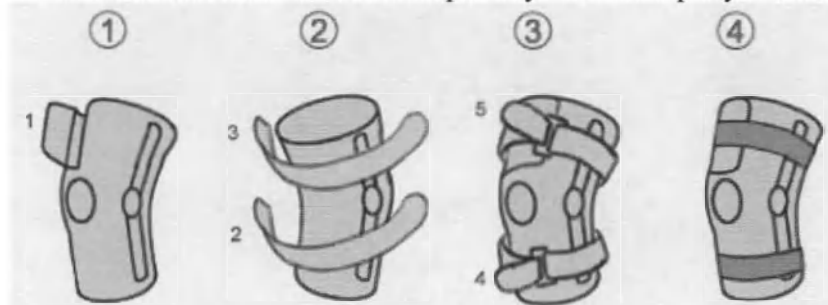

OKD-11



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



OKD-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

ATOM ACL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

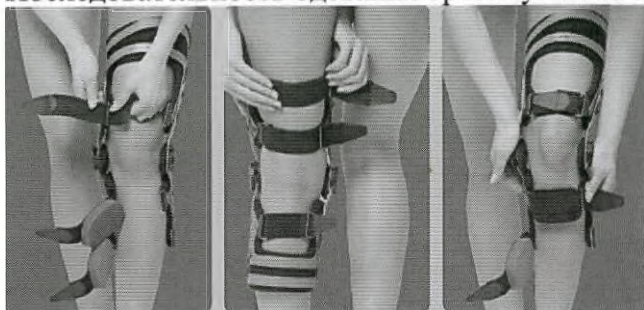


RAPTOR BIONIC



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

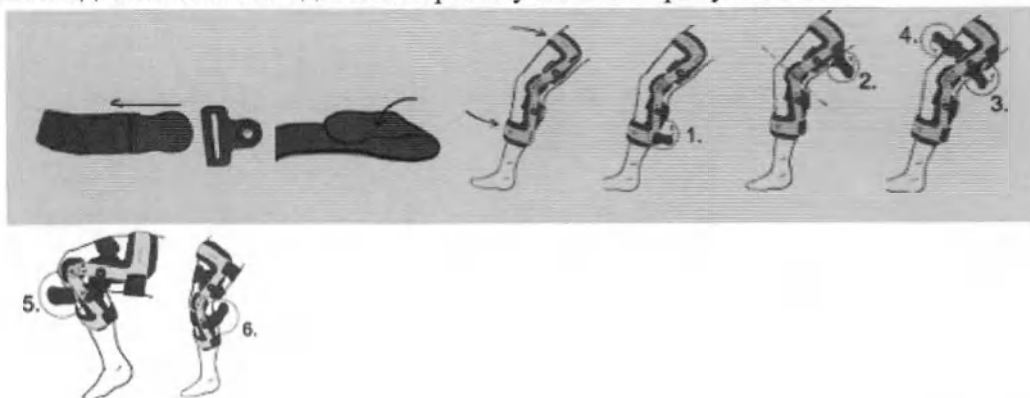

OKD-23



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

- 1) Наденьте ортез на ногу и подтяните его так, чтобы коленная чашечка была в периферическом кольце.
- 2) Закрепите липучки (1,2) в указанном порядке.



- 3) Закрепите липучки (3 и 4) в указанном порядке



- 4) Закрепите липучки (5 и 6) в указанном порядке



- 5) Готовое изделие




OKD-24



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

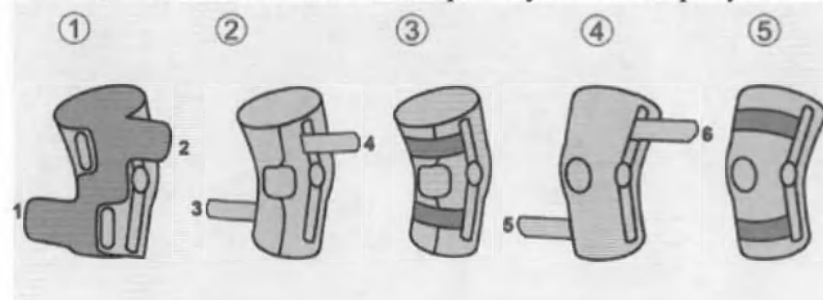

OKD-27



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

OKD-28



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Закрепите периферическую скобу на ноге так, чтобы разгрузочная Пелота (1) находилась чуть ниже коленной чашечки.




- 2) Застегните липучку
- 3) Готовое изделие

OKD-29



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

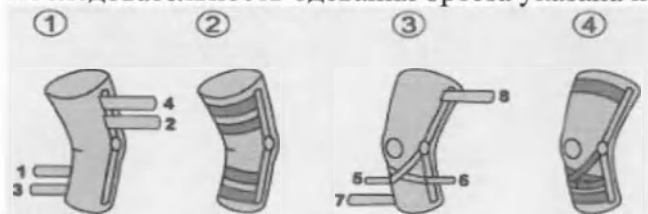


RAPTOR/2



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

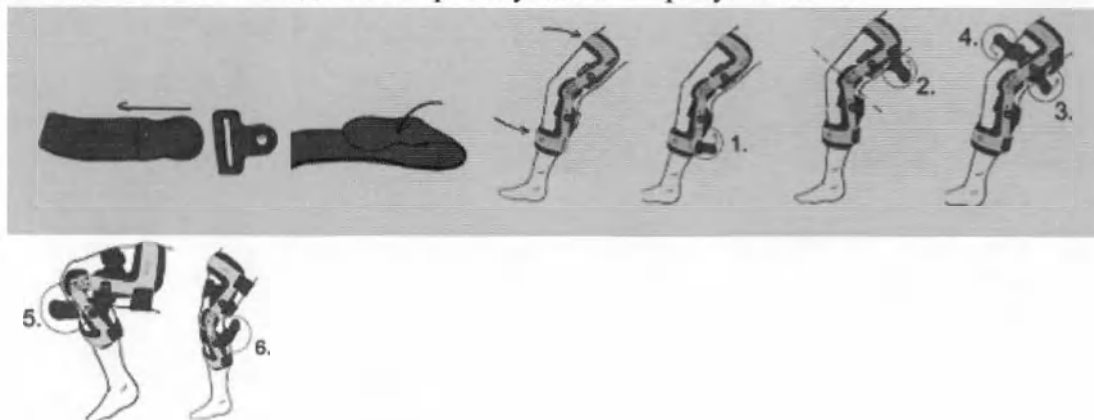

AM-OSS-21




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-OSS-24



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

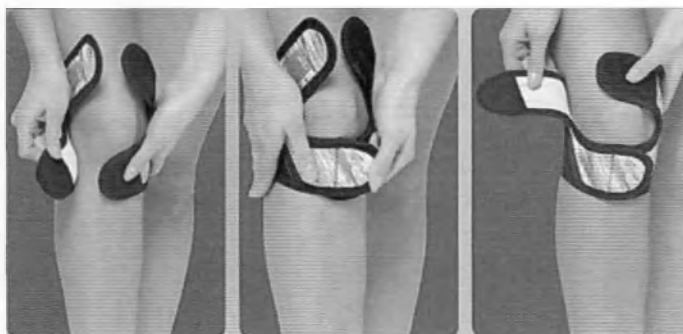


AM-OSS-26



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

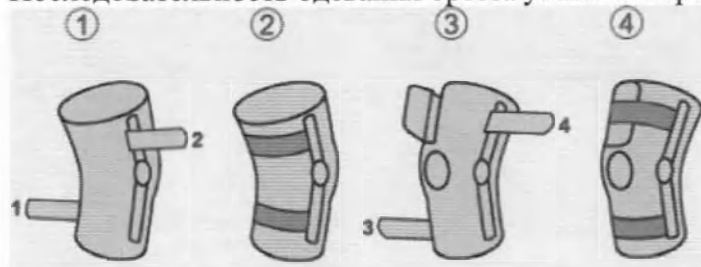


AM-OSS-27



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

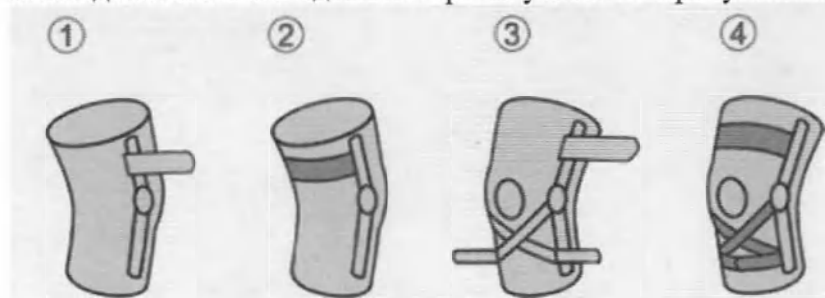


AM-OSS-28



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

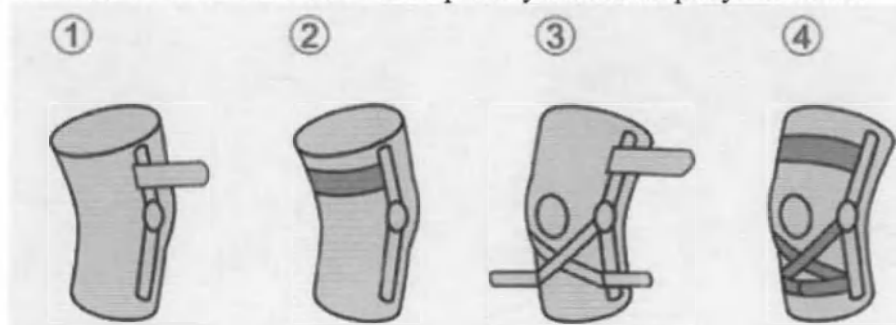


AM-OSS-29



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

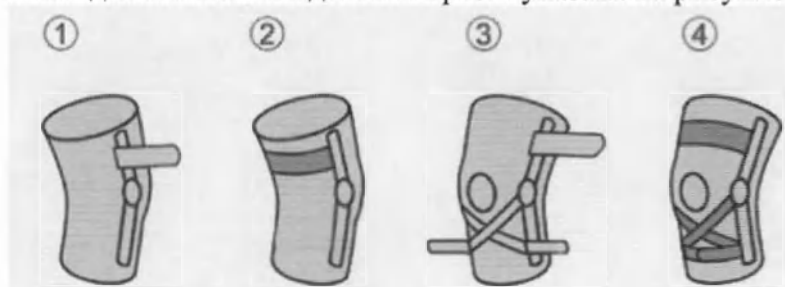


AS-U-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

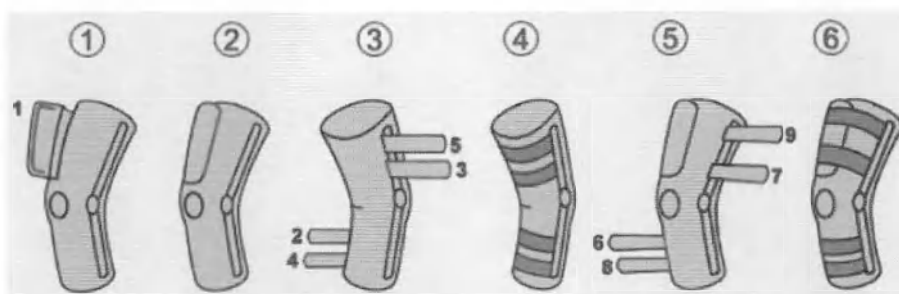


AS-U-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

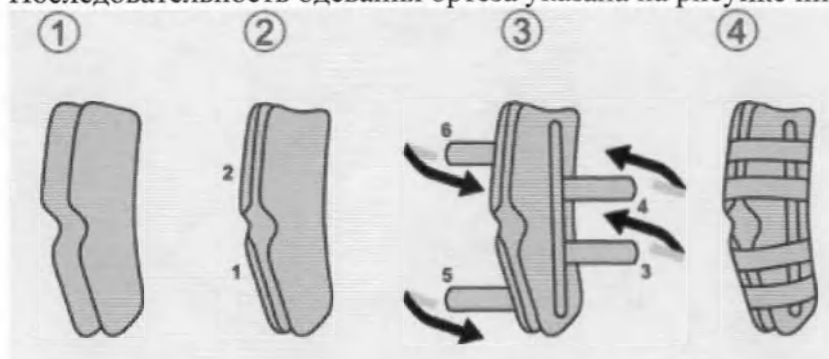


AS-U-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

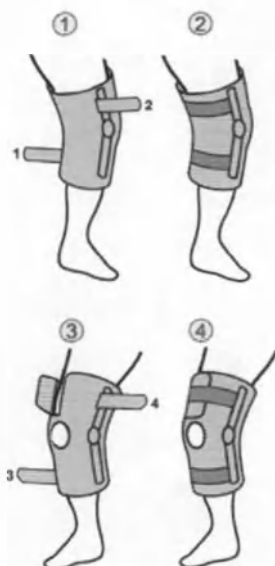


RW-ProFit



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

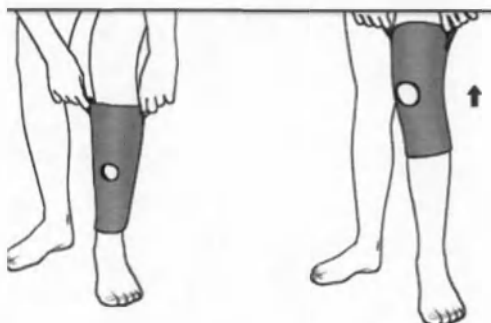


RW-Sport




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

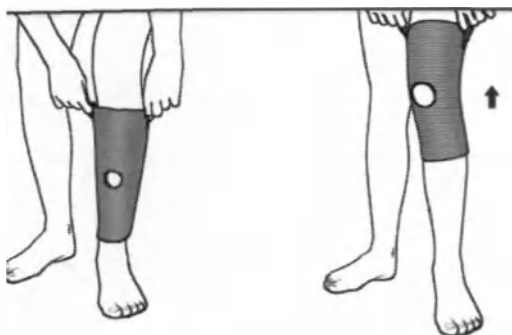


RW-PowerFit

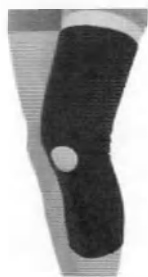

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

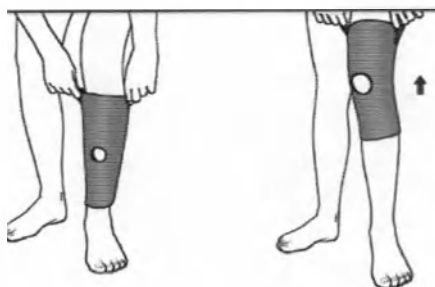


RW-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

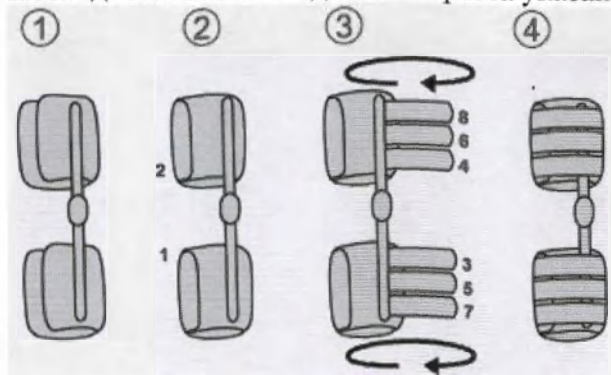



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

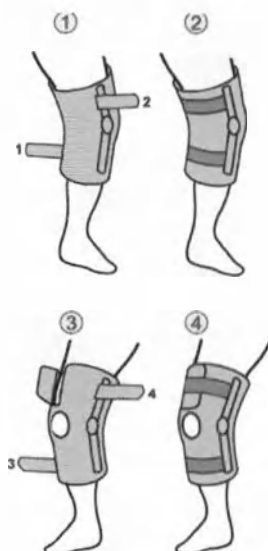


FIX-KD-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

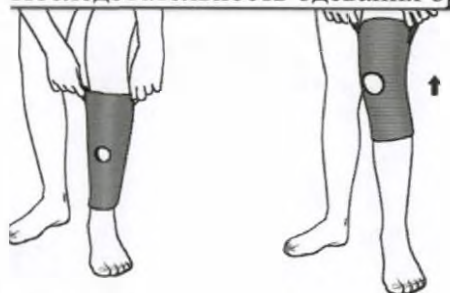

- 1) Наденьте ортез на ногу.
- 2) С помощью ручек подтяните скобу вверх так, чтобы коленная чашечка нашла в перистальтическом отверстии.




3) Готовое изделие

FIX-KD-02




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

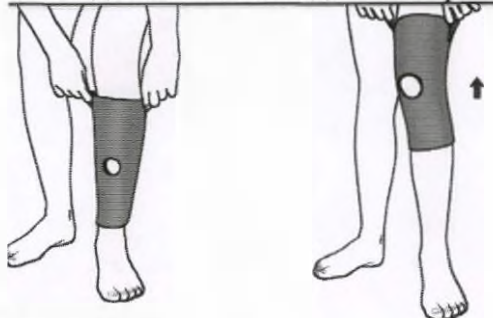

- 1) Наденьте ортез на ногу.
- 2) С помощью ручек подтяните скобу вверх так, чтобы коленная чашечка нашла в перистальтическом отверстии.

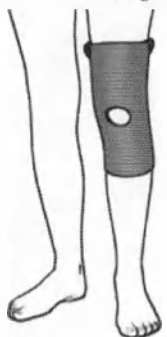


3) Готовое изделие

FIX-KD-03




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

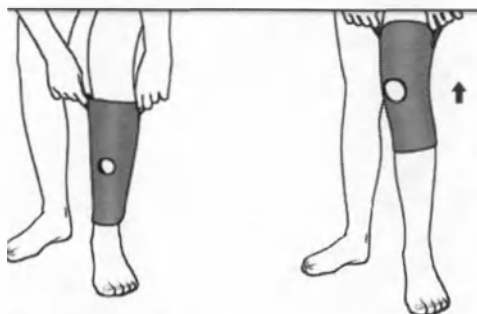

- 1) Наденьте ортез на ногу.
- 2) С помощью ручек подтяните скобу вверх так, чтобы коленная чашечка нашла в перистальтическом отверстии.

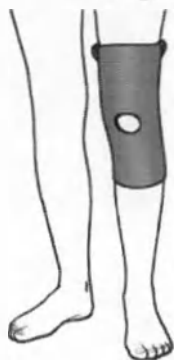


- 3) Готовое изделие

FIX-KD-04




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

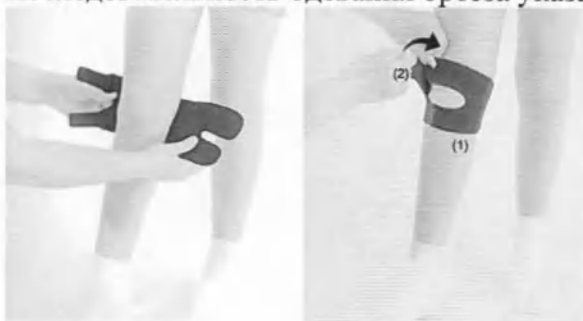

- 1) Прикрепите скобу к ноге
- 2) Застегните липучку (1) и (2)

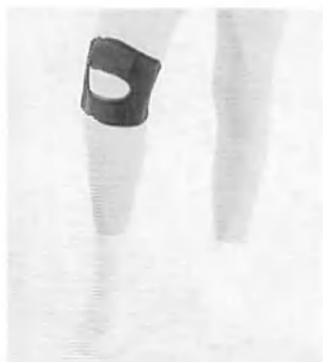


3) Готовое изделие

FIX-KD-05




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

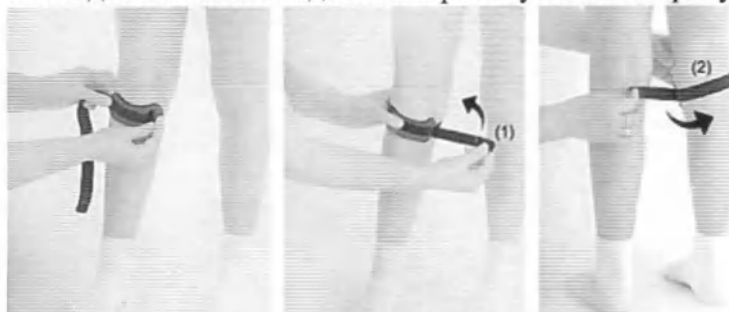

- 1) Прикрепите скобу к ноге
- 2) Проденьте ремень через пряжку (1) и закрепите липучку (2)

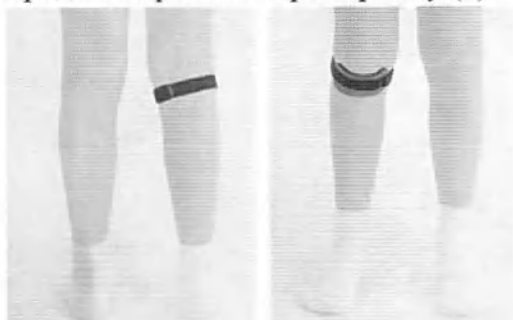


3) Готовое изделие

FIX-KD-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

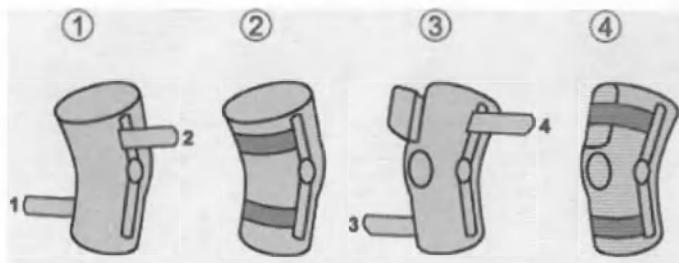


FIX-KD-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

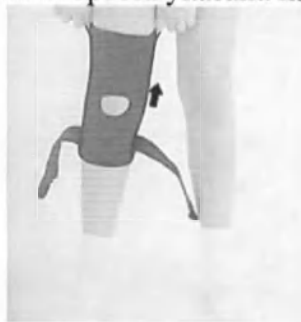

- 1) Наденьте скобу на ногу
- 2) С помощью ручек подтяните скобу вверх так, чтобы коленная чашечка нашла в перистальтическом отверстии.



- 3) Пристегните ремни ACL.

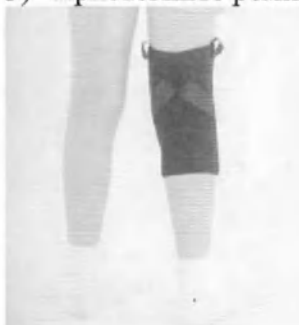

- 4) Готовое изделие




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Наденьте скобу на ногу.
- 2) С помощью ручек подтяните скобу вверх так, чтобы коленная чашечка нашла в перистальтическом отверстии

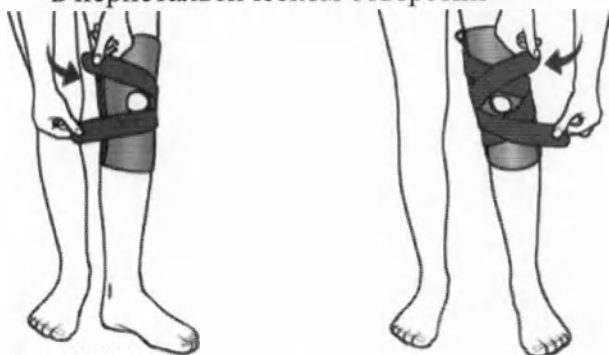

- 3) Прикрепите к изделию резиновые ленты на липучке с внешней и внутренней сторон ноги.



- 4) Готовое изделие: стабилизация ACL
- 5) Готовое изделие: стабилизация MCL




6) Готовое изделие: стабилизация LCL

FIX-KD-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

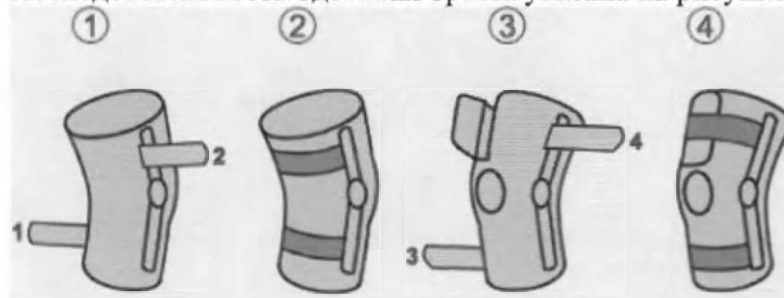

FIX-KD-10




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




1) Сплести ремни из пряжек и развернуть ортез

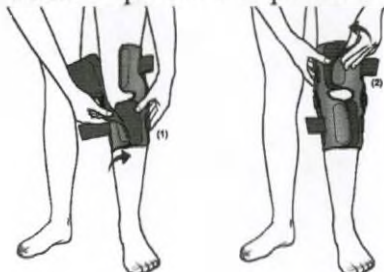

2) Наденьте скобу на ногу и закрепите липучку по нумерации (1) (2)

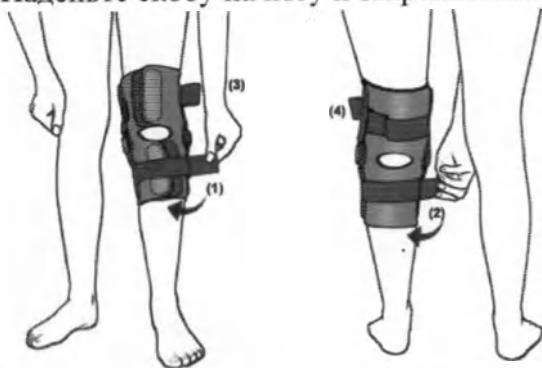

3) Проденьте ленты через пряжки и закрепите их в указанном порядке

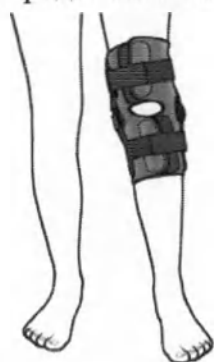

4) Готовое изделие.

FIX-KD-12




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




1) Сплести ремни из пряжек и развернуть ортез

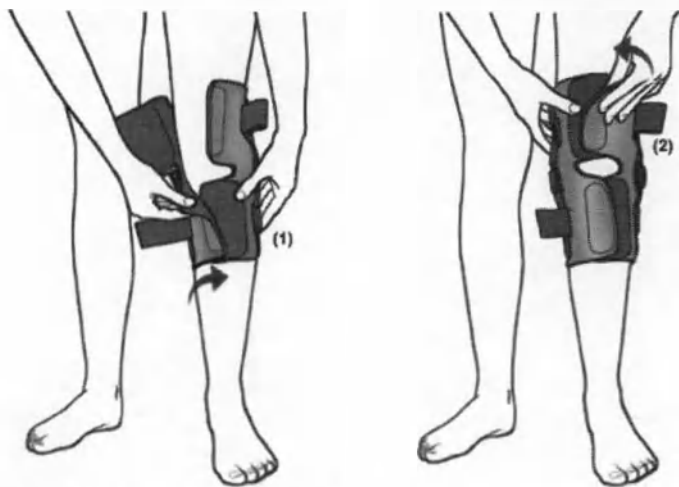

2) Наденьте скобу на ногу и закрепите липучку по нумерации (1) (2)

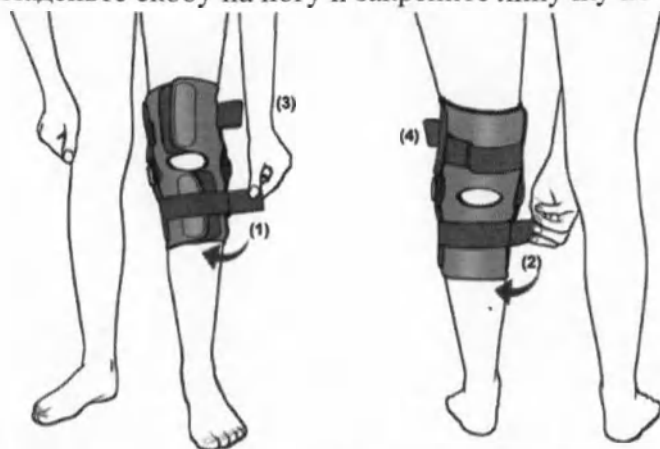

3) Проденьте ленты через пряжки и закрепите их в указанном порядке

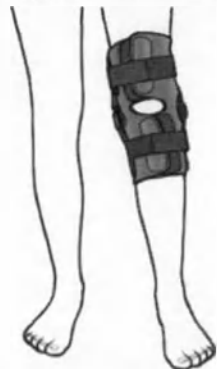


5) Готовое изделие.

FIX-KD-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

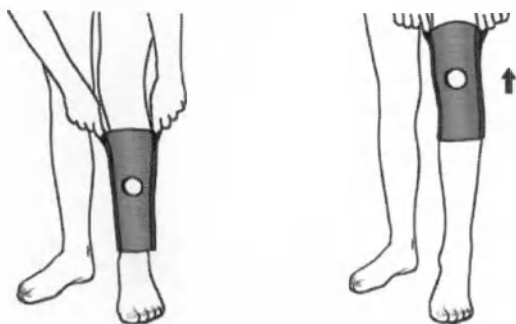


AM-KDX-01/1RE



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

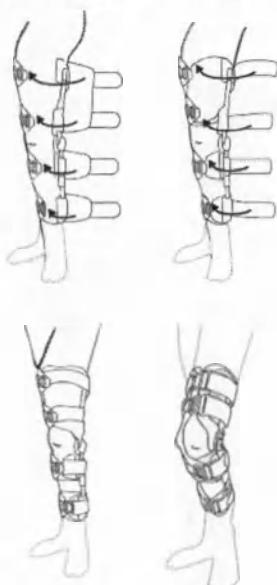


AM-KDX-01/2R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

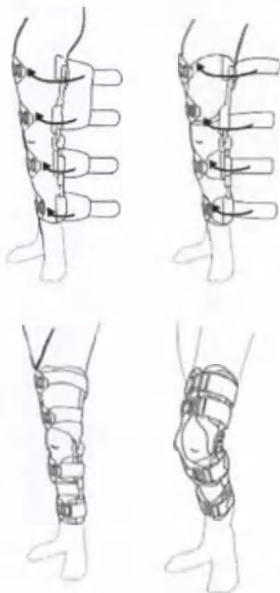


OKD-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

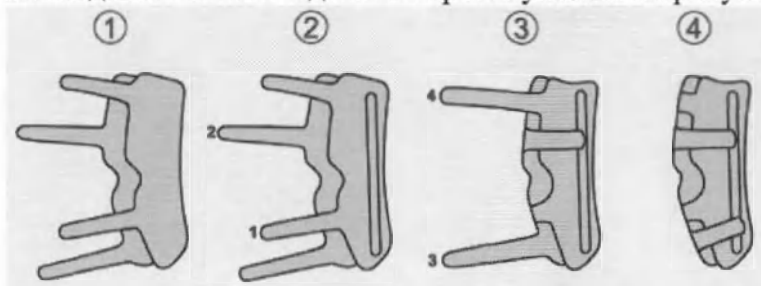


OKD-03/10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

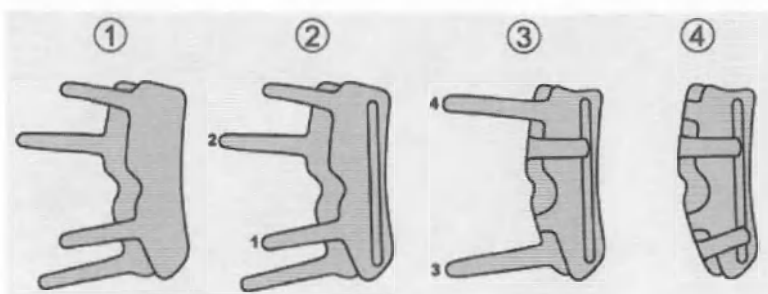


OKD-03/20



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

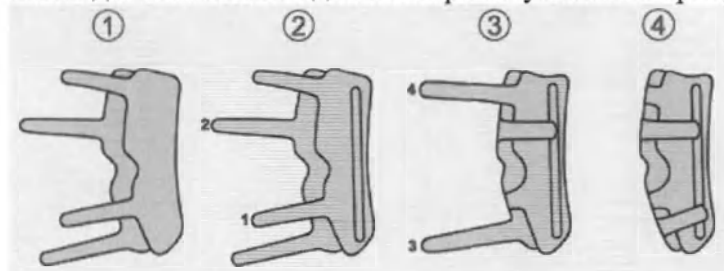

OKD-16



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

OKD-17



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

OKD-18



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




- 1) Прикрепите ортез к ноге таким образом, чтобы коленная чашечка находилась в перианальном отверстии



- 2) Закрепите задние эластичные липучки в указанном порядке (1) и (2)



- 3) Застегните липучку в указанном порядке (3,4,5,6).

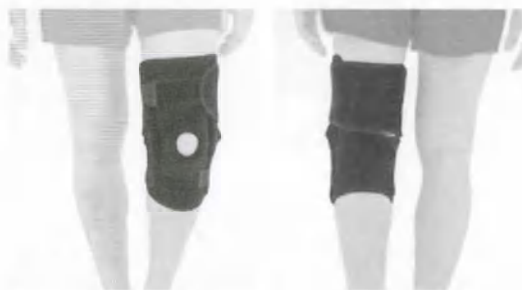


- 4) Готовое изделие.

OKD-19




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

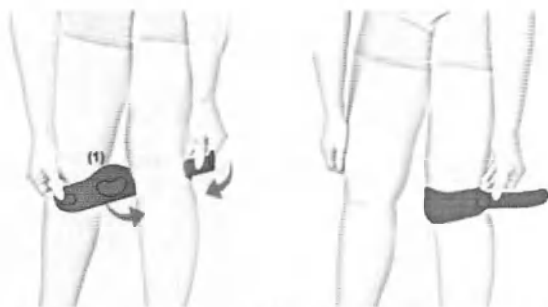

- 1) Закрепите периферическую скобу на ноге так, чтобы разгрузочная Пелота (1) находилась чуть ниже коленной чашечки.

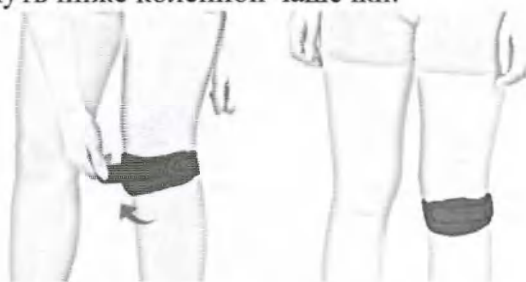

- 2) Застегните липучку\
- 3) Готовое изделие


OKD-20




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

- 1) Прикрепите ортез к ноге таким образом, чтобы коленная чашечка находилась в отверстии.
- 2) Закрепите задние эластичные липучки в указанном порядке (1) и (2).

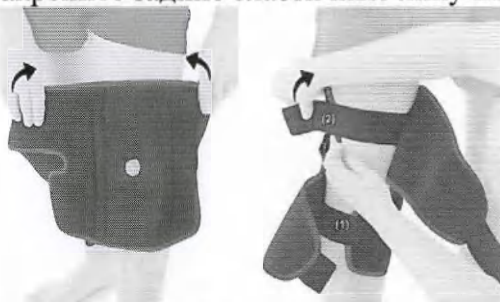

- 3) Отрегулируйте положение коленной чашечки с помощью специального крепления (1).
- 4) Застегните липучку (3,4) в указанном порядке.

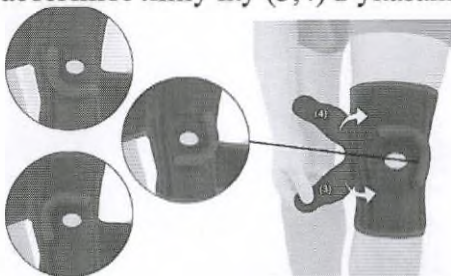

- 5) Застегните липучку в указанном порядке (3,4,5,6)



6) Готовое изделие




OKD-25



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

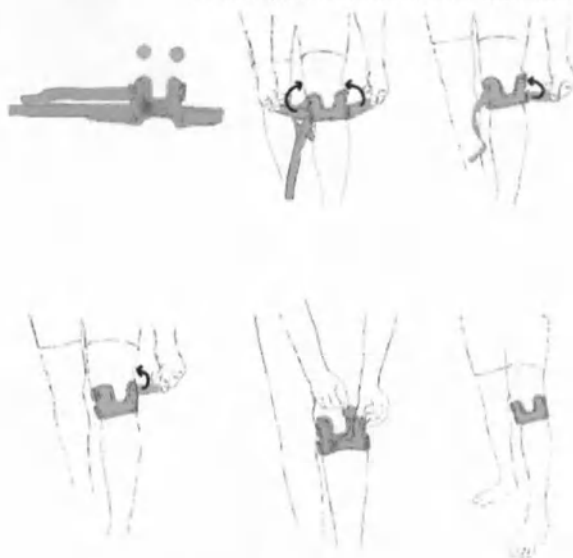


AM-KDX-01 UNIVERSO



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

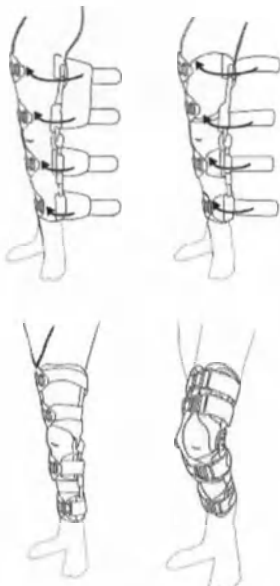


ATOM/2RA 4ARMY



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

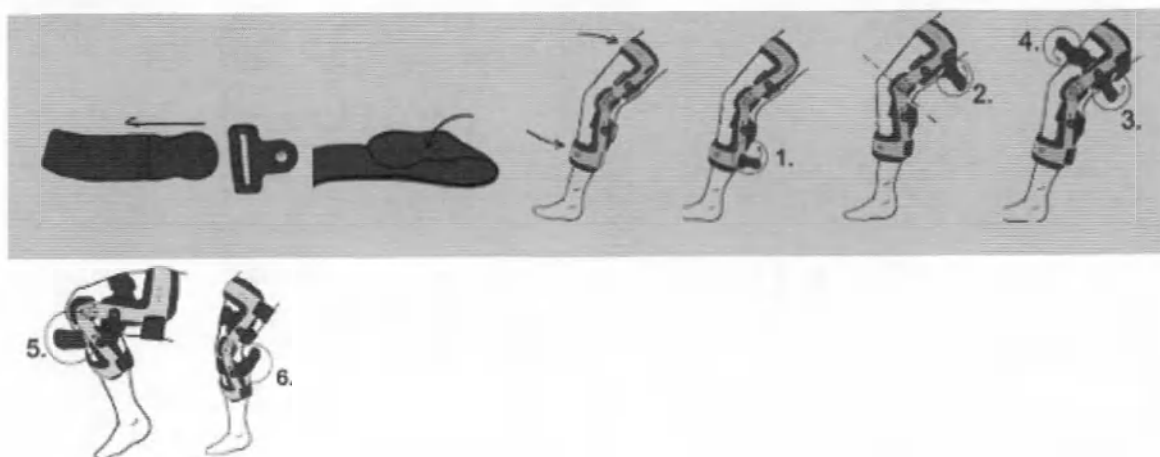

RAPTOR BIONIC 4ARMY



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




RAPTOR/2RA SHORT



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

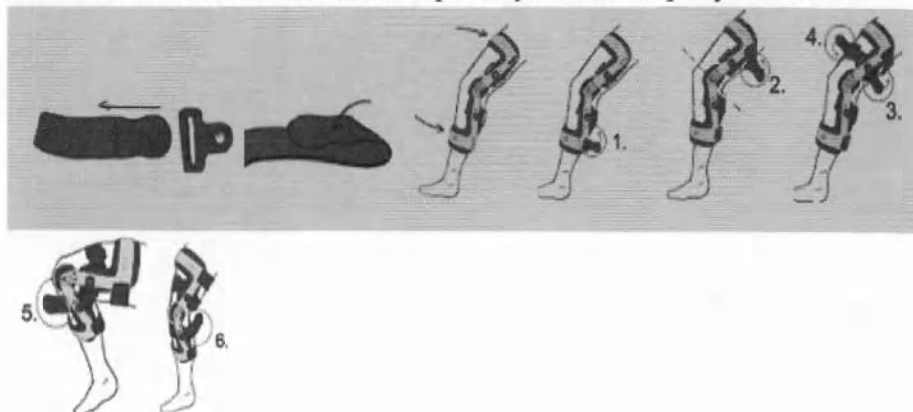


RAPTOR/2 SHORT



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

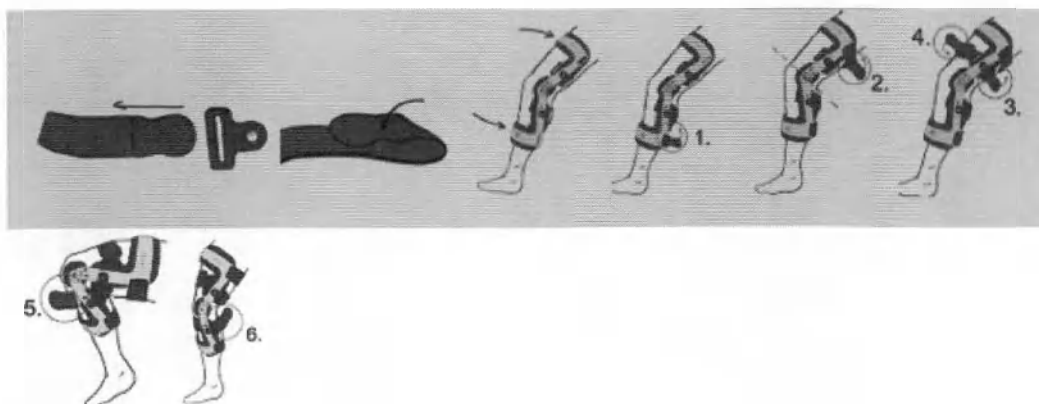

OKD-31




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Наденьте ортез на ногу и подтяните вверх.

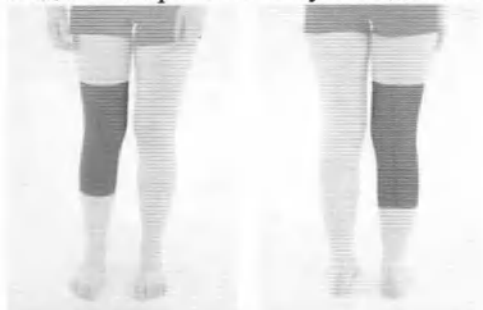

- 2) Готовое изделие.

AM-DOSK-Z/1R




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




1) Снимите ремни с пряжек и расстегните верхнюю часть ортопедии.

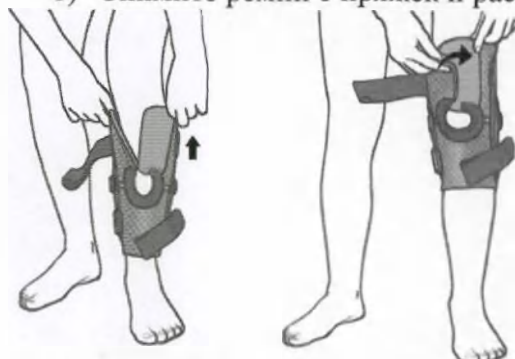

2) С помощью ручек подтяните скобу вверх так, чтобы коленная чашечка оказалась в перистальтическое кольцо и закрепите верхнюю часть ортеза.

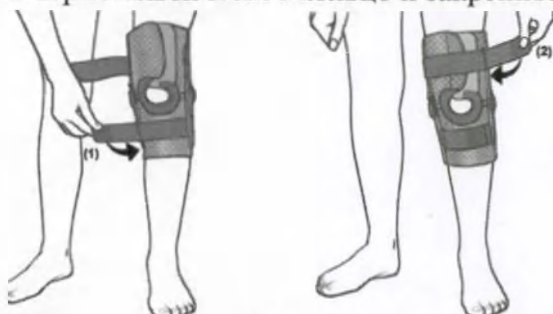

3) Проденьте Нижний ремень через пряжку и закрепите на липучке (1). Так же застегните верхнюю планку (2).

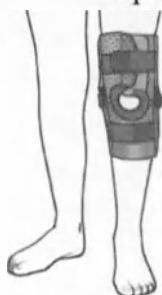


4) Готовое изделие

AM-DOSK-O/1R




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

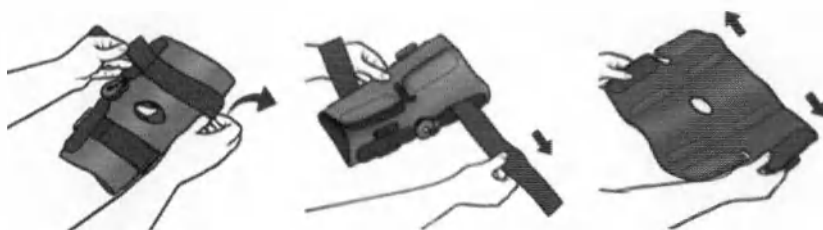


4) Сплести ремни из пряжек и развернуть ортез

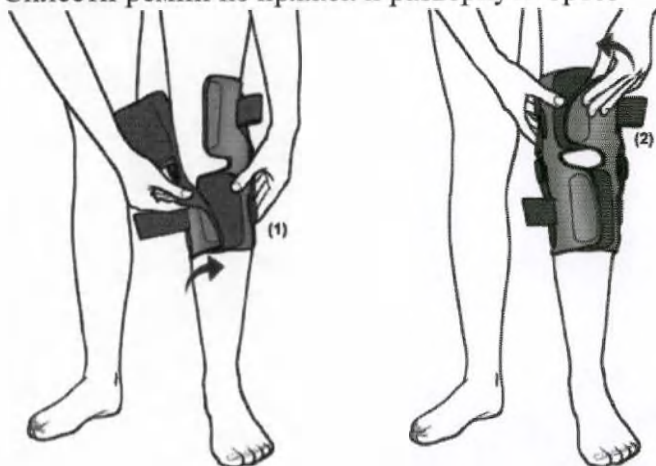

5) Наденьте скобу на ногу и закрепите липучку по нумерации (1) (2)

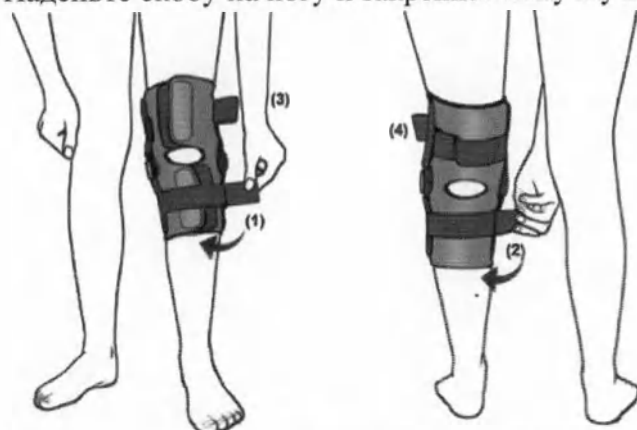

6) Проденьте ленты через пряжки и закрепите их в указанном порядке

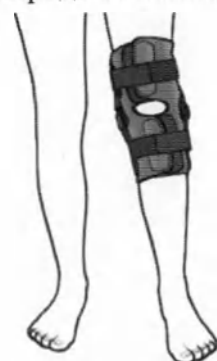


6) Готовое изделие.

IB-SK/2



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

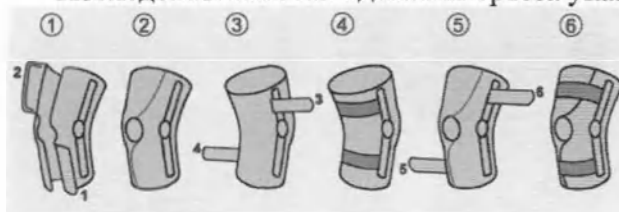


AM-SB/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

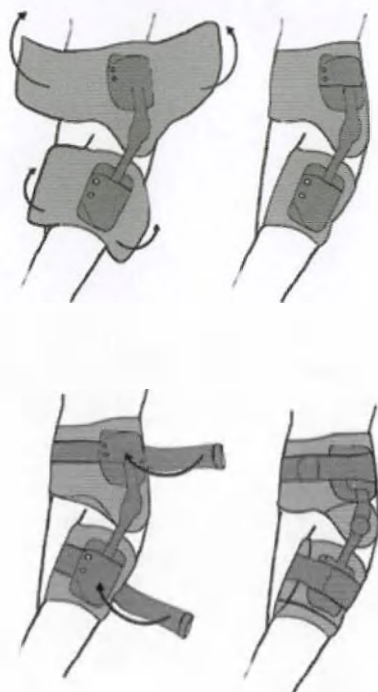

4ARMY-U-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-OSS-30



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-SB-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Пристегните поясную ортез. Если окружность больше, прикрепите липучку (2) и пристегните ремень



- 2) Застегните нижние липучки в указанном порядке (1,2)

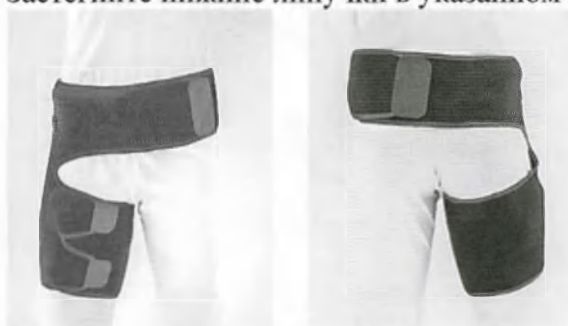

- 3) Готовое изделие.

AM-SB-07


Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

- 1) Снимите скобки и пояс по периметру

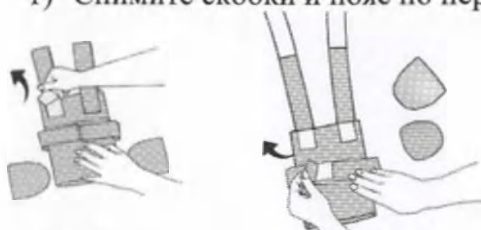

- 2) Закрепите отводные клинья



3) Положите ребенка на подушку.



4) Пристегните ремни туловища.

5) Пристегните ремни.



6) Конечный продукт.



AS-PU-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже





AS-PU-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

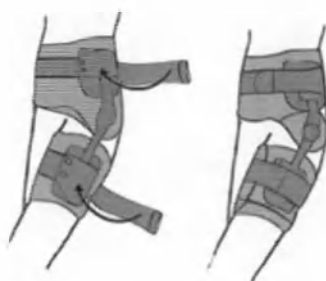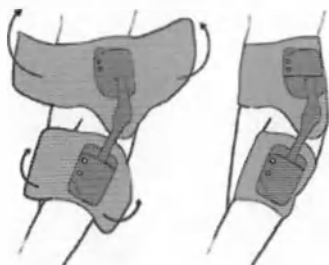

AS-U-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

1) Наденьте скобу на ногу.



2) Проденьте ленты через пряжки и закрепите в указанном порядке (1,2,3)



3) Готовое изделие

AS-U-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



1) Наденьте скобу на ногу.

2) Проденьте ленты через пряжки и закрепите в указанном порядке (1,2,3)

3) Готовое изделие

FIX-KD-11




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Расстегните ортез.
- 2) Наденьте ортопедию и закрепите боковые липучки

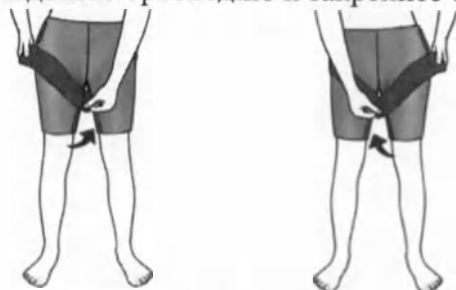

- 3) Установите конечность в терапевтическое положение и пристегните ремни безопасности.



- 4) Прикрепите к изделию резиновые ленты на липучке с внешней и внутренней сторон ноги.





- 5) Готовое изделие.

FIX-KD-19



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

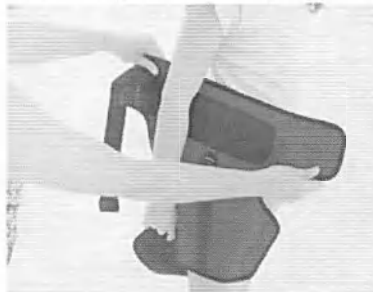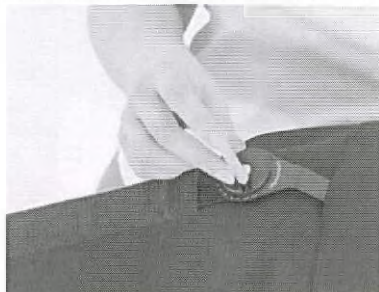

- 1) Прежде чем надеть ортез на конечность, часы он должен быть установлен в указанном лечащего врача области движимого имущества тазобедренного сустава.
- 2) Прикрепите скобу к ноге




- 3) Застегните липучку (1).

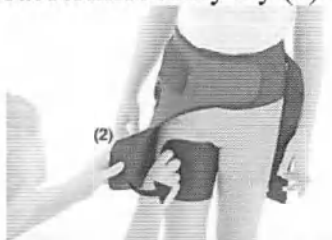

- 4) Застегните липучку (1).



- 5) Проденьте ремень через пряжку и закрепите на липучке (3) и (4)

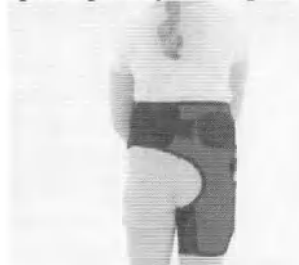

- 6) Готовое изделие.



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-SB/1RE


Одевать ортез на ночь можно
Перед тем как одеть ортез,
применения указанными на



только по рекомендации
следует ознакомиться с правилами его
изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность

одевания ортеза указана на рисунке ниже

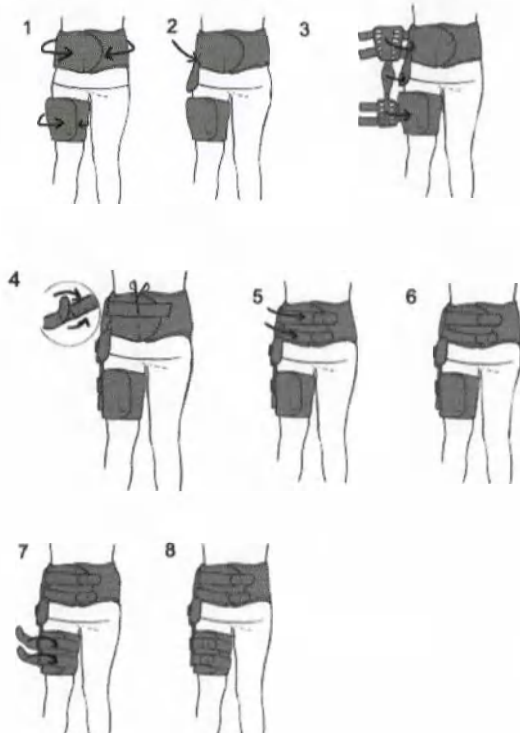

AM-SB/2R




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



- 1) Прежде чем надеть ортез на конечность, часы он должен быть установлен в указанном лечащего врача области движимого имущества тазобедренный сустав
- 2) Прикрепите ортез к ноге.

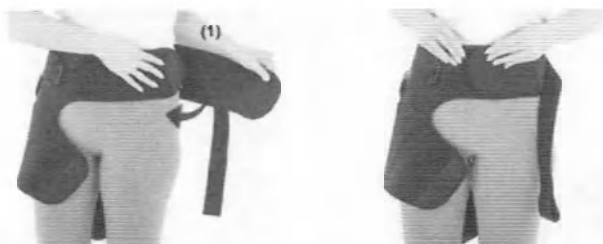

- 3) Застегните липучку (1).



- 4) Застегните липучку (1).



- 5) Проденьте ремень через пряжку и закрепите на липучке (3) и (4)




- 6) Готовое изделие.

AM-SB-01




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

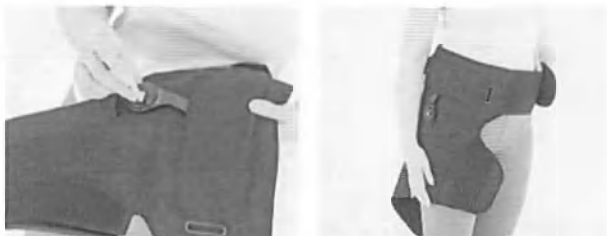

- 7) Прежде чем надеть ортез на конечность, часы он должен быть установлен в указанном лечащего врача области движимого имущества тазобедренный сустав
- 8) Прикрепите ортез к ноге.

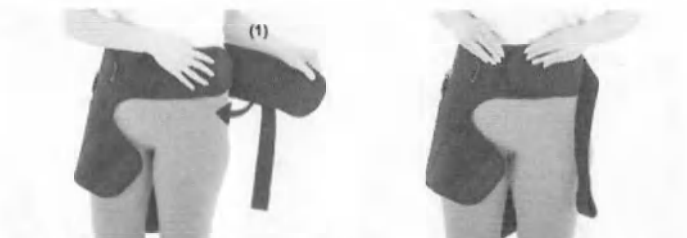

- 9) Застегните липучку (1).



- 10) Застегните липучку (1).



- 11) Проденьте ремень через пряжку и закрепите на липучке (3) и (4)



- 12) Готовое изделие.

AM-SB-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-SB-03




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

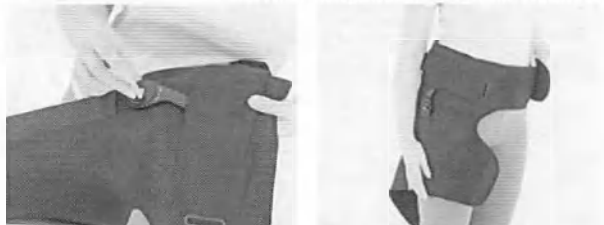

13) Прежде чем надеть ортез на конечность, часы
он должен быть установлен в указанном
лечащего врача области подвижного имущества
тазобедренный сустав

14) Прикрепите ортез к ноге.

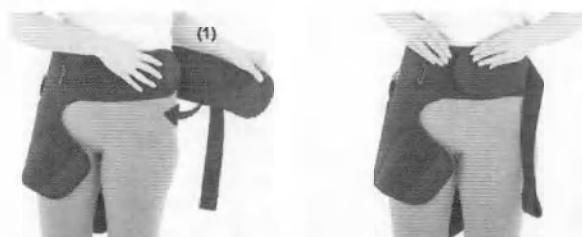

15) Застегните липучку (1).



16) Застегните липучку (1).



17) Проденьте ремень через пряжку и закрепите на липучке (3) и (4)




18) Готовое изделие.

AM-SB-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

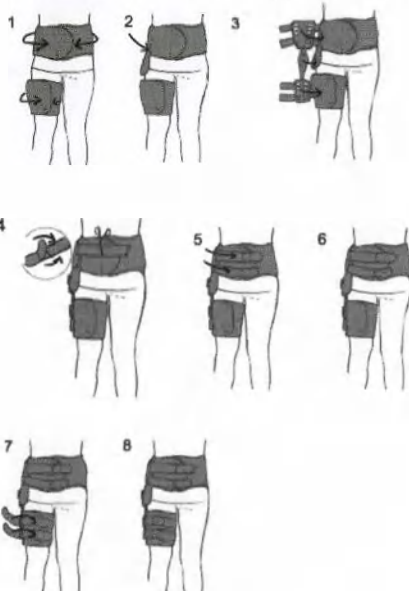


AM-SB-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

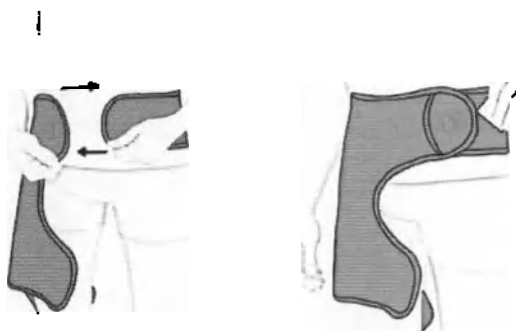

- 1) Пристегните поясную ортез.
- 2) Отметьте конец застежки мелом




- 3) Закрепите деталь в отмеченном месте и закрепите застежку



- 4) Повторите шаги по закреплению нижней части ортеза с точки 1-3.



- 5) Отметьте конец застежки мелом
- 6) Закрепить элемент в выбранном месте и застегнуть застежку.

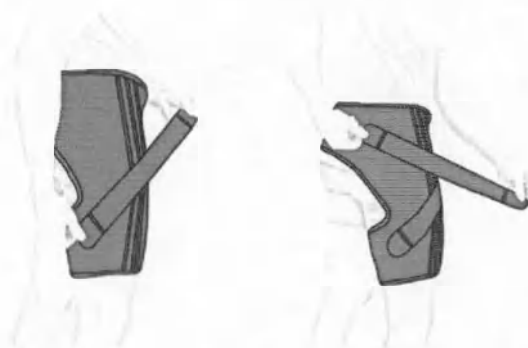

7) Закрепите эластичные ремни крест-накрест на стороне ортопедии



8) Готовое изделие.

R4M-U



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




R4M-U-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

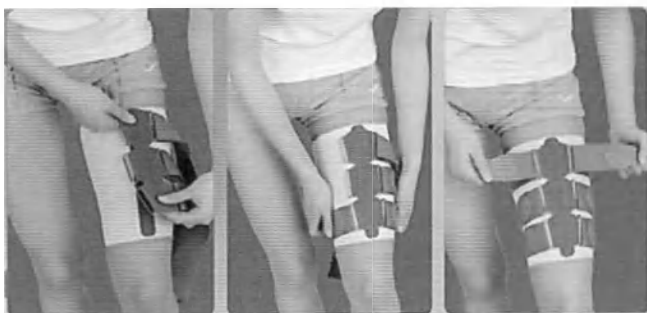

AS-U



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




ТВ-06





Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

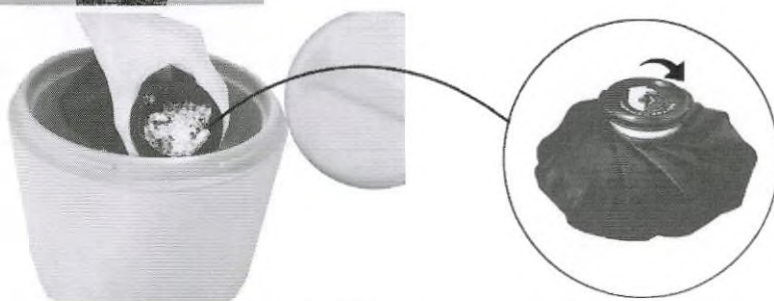

- 1) Положите лед в мешок и плотно закрутите крышку.

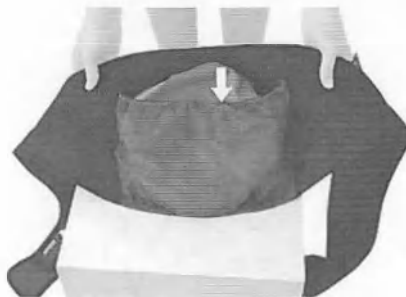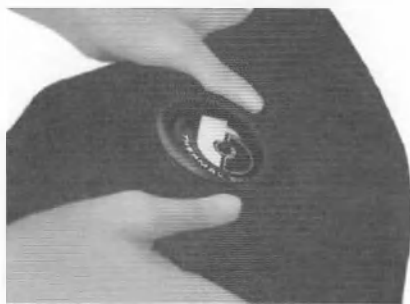

2) Затем вставьте колпачек в отверстие в ортезе.

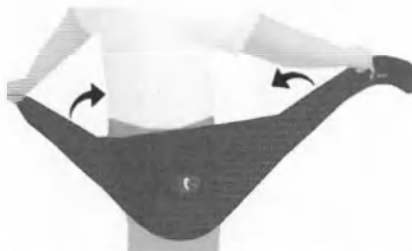

3) Поместите ортез в нужное место.



4) Застегните застежки-липучки (1) и (2).



5) Чтобы обеспечить максимально возможное сжатие и анатомическую форму мешка для льда, нажмите и удерживайте спусковой клапан, пока масса воздуха не выйдет из мешка.




6) Готовое изделие.



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

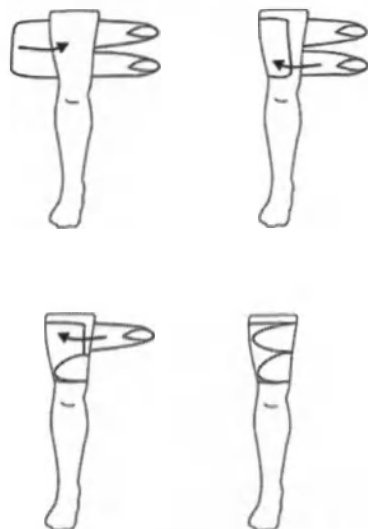


AM-SB/IRE DUAL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

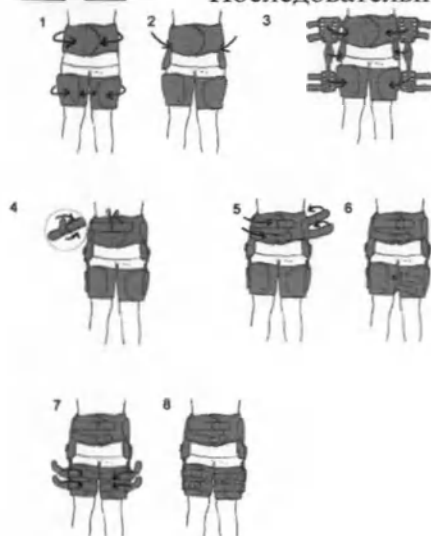




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

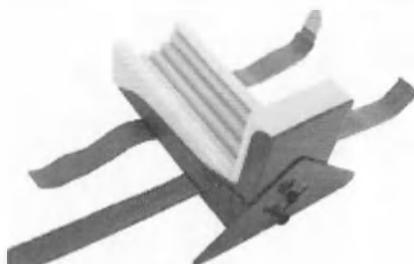

1) Расстегните ортез.

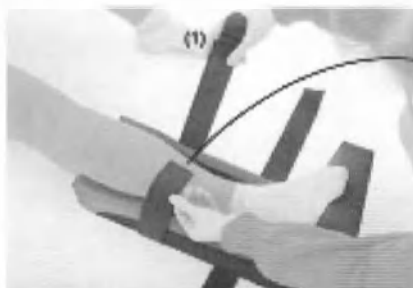


2.





3.

2) Застегните ремешок (1) застежкой-липучкой. При необходимости отрежьте лишнюю длину.

3) Застегните застежку-липучку (2). При необходимости отрежьте лишнюю длину.

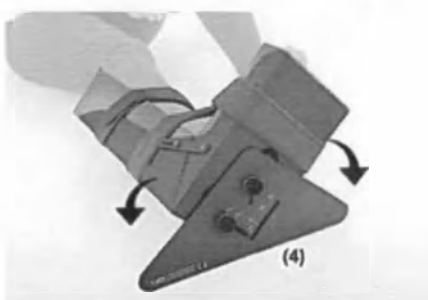

4) С помощью треугольника деротации (3) Установите ногу в нужное положение.

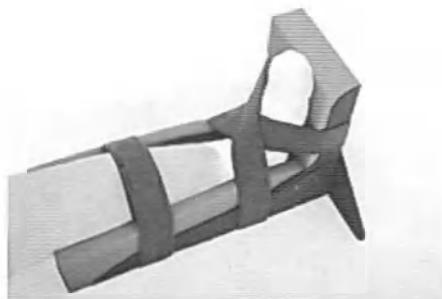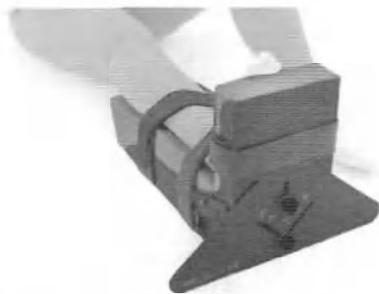


5) Готовое изделие.

AM-ADS-R (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

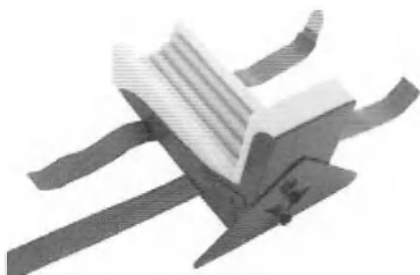

5) Растегните ортез.




2.

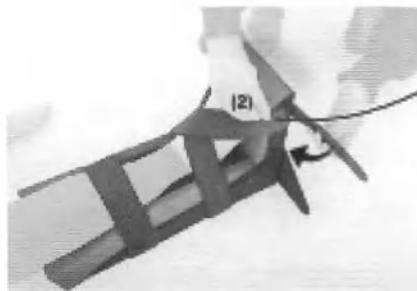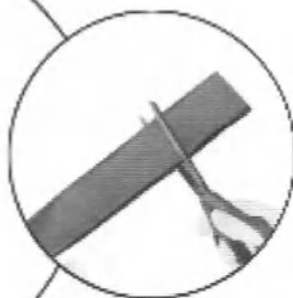

3.

6) Застегните ремешок (1) застежкой-липучкой. При необходимости отрежьте лишнюю длину.

7) Застегните застежку-липучку (2). При необходимости отрежьте лишнюю длину.

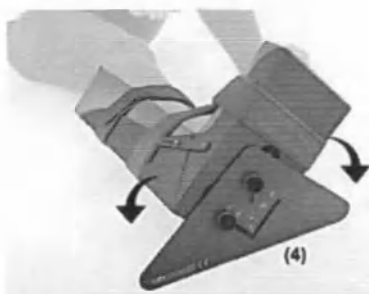

8) С помощью треугольника деротации (3) Установите ногу в нужное положение.



5) Готовое изделие.

PCO-L-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



PCO-L-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.




OKD-10

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

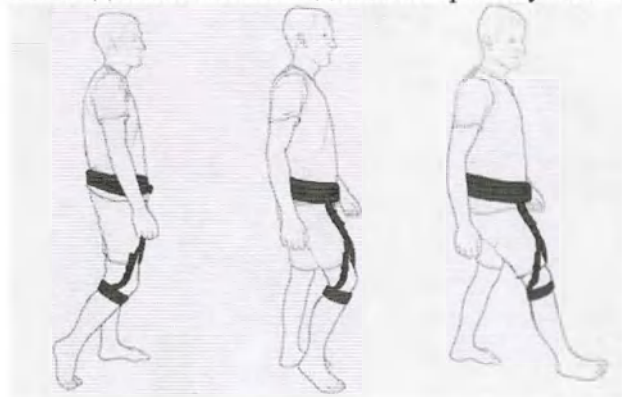


OKD-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

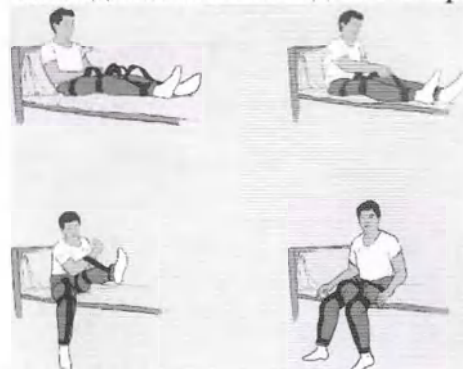

OKD-14




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже
ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ШИНЫ 1RE


- 1) установите ортез в примерное положение, в котором хотите ограничить изгиб и выпрямление
- 2) прижимая упоры к середине шарнира, переместить их по периметру в желаемое место с указанным углом.

- 3) Заблокировать упоры специальным блокатором, который идет в комплекте с шиной.

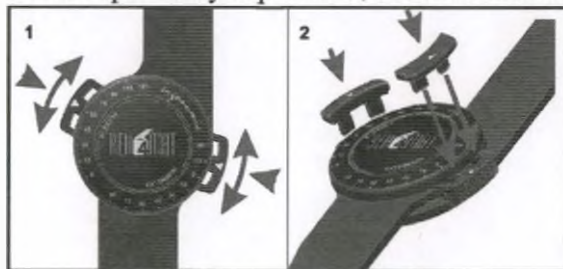

ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВУХОСНОЙ ШИНЫ 2R

- 1) Открыть защитную крышку поднимая ее в специальном месте.
- 2) Установить рекомендуемый угол сгибания или выпрямления.
- 3) Заблокировать оси шины с обеих сторон вставляя 4 блокираторы в нужные отверстия.
- 4) Закрыть и защелкнуть защитную крышку.

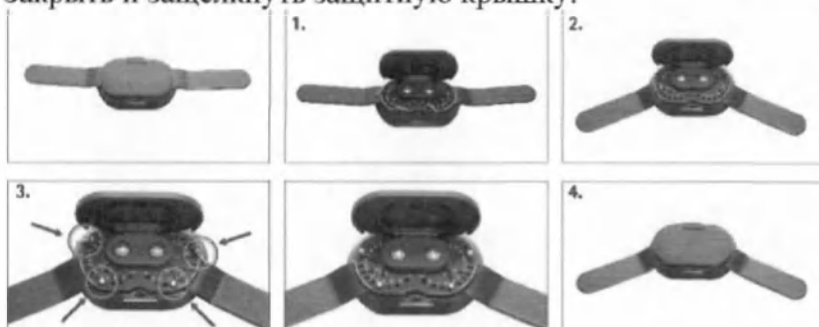

COMPLEX/2R




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже


ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ШИНЫ 1RE

- 1) установите ортез в примерное положение, в котором хотите ограничить изгиб и выпрямление
- 2) прижимая упоры к середине шарнира, переместить их по периметру в желаемое место с указанным углом.
- 3) Заблокировать упоры специальным блокатором, который идет в комплекте с шиной.

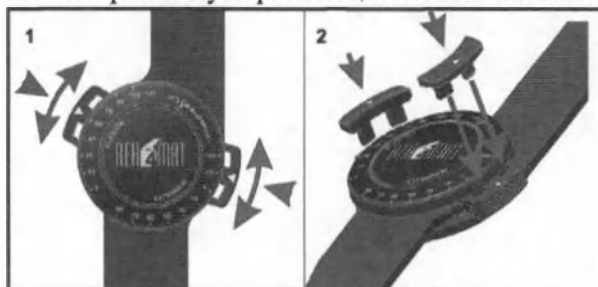

ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВУХОСНОЙ ШИНЫ 2R

- 1) Открыть защитную крышку поднимая ее в специальном месте.
- 2) Установить рекомендуемый угол сгибания или выпрямления.
- 3) Заблокировать оси шины с обеих сторон вставляя 4 блокиратора в нужные отверстия.
- 4) Закрыть и защелкнуть защитную крышку.

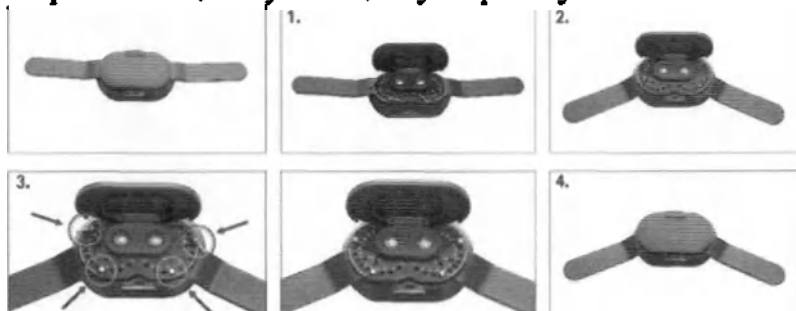

COMPLEX/2R DUAL




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже


ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ШИНЫ 1RE

- 1) установите ортез в примерное положение, в котором хотите ограничить изгиб и выпрямление
- 2) прижимая упоры к середине шарнира, переместить их по периметру в желаемое место с указанным углом.
- 3) Заблокировать упоры специальным блокатором, который идет в комплекте с шиной.

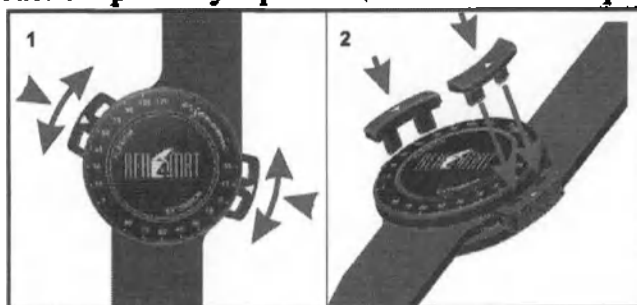

ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВУХОСНОЙ ШИНЫ 2R

- 1) Открыть защитную крышку поднимая ее в специальном месте.
- 2) Установить рекомендуемый угол сгибания или выпрямления.
- 3) Заблокировать оси шины с обеих сторон вставляя 4 блокиратора в нужные отверстия.
- 4) Закрыть и защелкнуть защитную крышку.

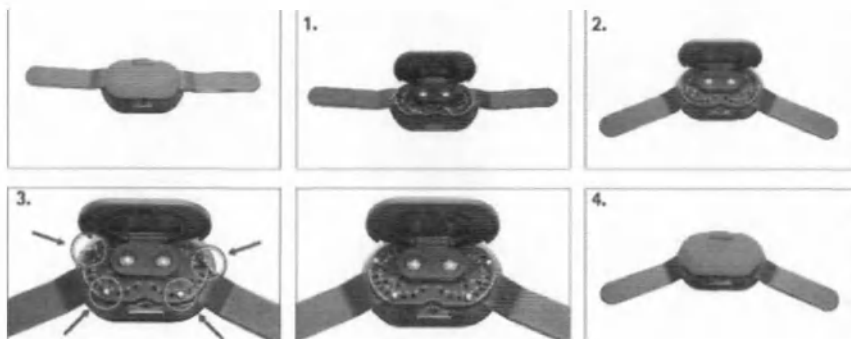

OKD-14 DUAL




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации. Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже


ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ШИНЫ 1R

- 1) установите ортез в примерное положение, в котором хотите ограничить изгиб и выпрямление
- 2) прижимая упоры к середине шарнира, переместить их по периметру в желаемое место с указанным углом.
- 3) Заблокировать упоры специальным блокиратором, который идет в комплекте с шиной.

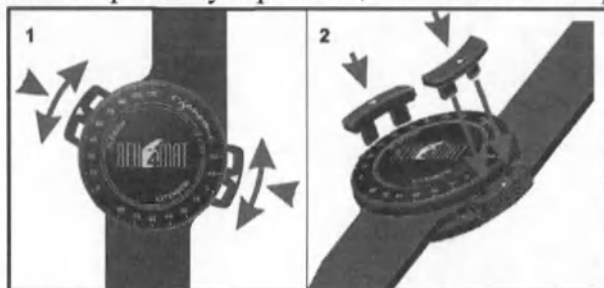

ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВУХОСНОЙ ШИНЫ 2R

- 1) Открыть защитную крышку поднимая ее в специальном месте.
- 2) Установить рекомендуемый угол сгибания или выпрямления.
- 3) Заблокировать оси шины с обеих сторон вставляя 4 блокираторы в нужные отверстия.
- 4) Закрыть и защелкнуть защитную крышку.

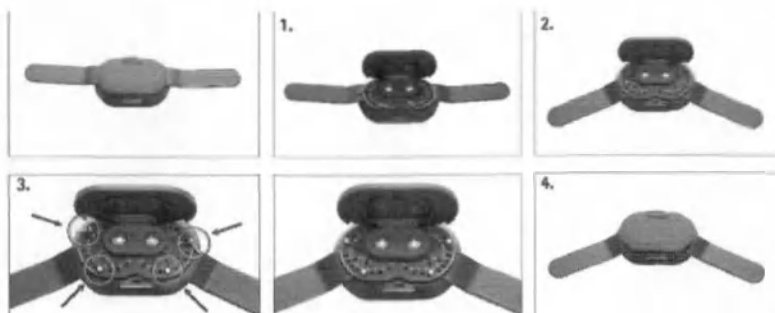

PCO-L-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-L-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-L-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже





Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


COMPLEX PLUS TLSO



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже
ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ШИНЫ 1RE

- 1) установите ортез в примерное положение, в котором хотите ограничить изгиб и выпрямление
- 2) прижимая упоры к середине шарнира, переместить их по периметру в желаемое место с указанным углом.
- 3) Заблокировать упоры специальным блокиратором, который идет в комплекте с шиной.

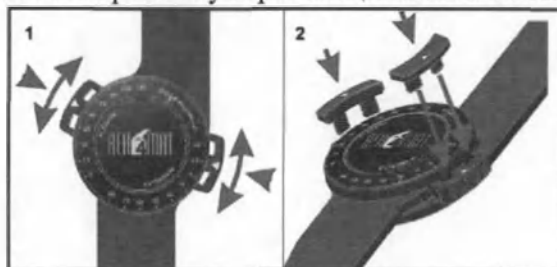

ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВУХОСНОЙ ШИНЫ 2R

- 1) Открыть защитную крышку поднимая ее в специальном месте.
- 2) Установить рекомендуемый угол сгибания или выпрямления.
- 3) Заблокировать оси шины с обеих сторон вставляя 4 блокиратора в нужные отверстия.
- 4) Закрыть и защелкнуть защитную крышку.

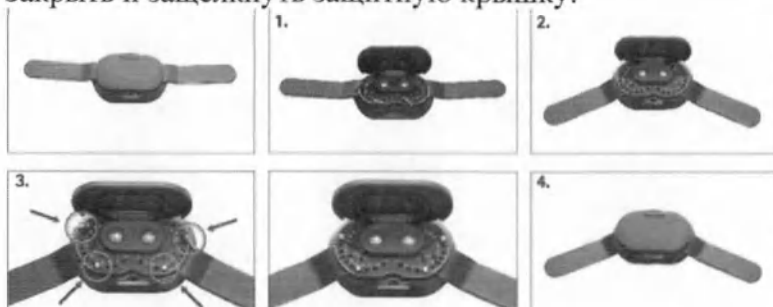




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации
Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже
ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ШИНЫ 1RE

- 1) установите ортез в примерное положение, в котором хотите ограничить изгиб и выпрямление
- 2) прижимая упоры к середине шарнира, переместить их по периметру в желаемое место с указанным углом.
- 3) Заблокировать упоры специальным блокиратором, который идет в комплекте с шиной.

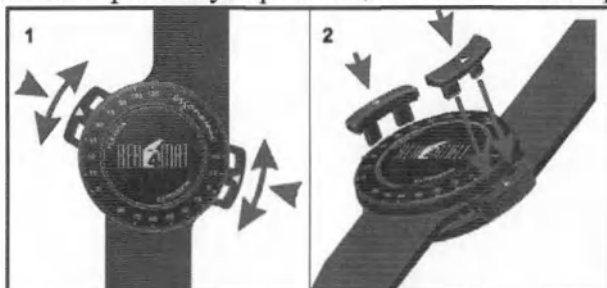

ИНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВУХОСНОЙ ШИНЫ 2R

- 1) Открыть защитную крышку поднимая ее в специальном месте.
- 2) Установить рекомендуемый угол сгибания или выпрямления.
- 3) Заблокировать оси шины с обеих сторон вставляя 4 блокиратора в нужные отверстия.
- 4) Закрыть и защелкнуть защитную крышку.

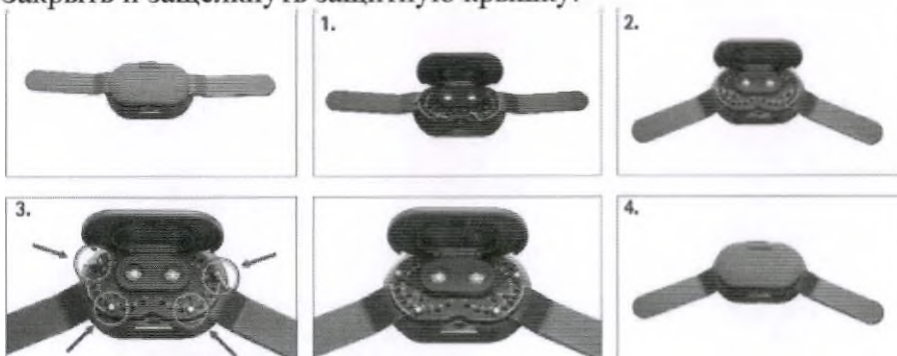

Очистка, дезинфекция

Очистка текстильной набивки.

- 1) Снять все текстильные набивки с ортеза.
- 2) Застегнуть все застежки-липучки.
- 3) Рекомендация: использовать мешок или сетку для стирки.
- 4) Текстильные набивки стирать при температуре 30 °С, используя обычное мягкое моющее средство. Не использовать кондиционер для белья. Хорошо прополоскать.
- 5) Сушить на воздухе. Не подвергать воздействию высоких температур (например, прямые солнечные лучи, тепло от кухонных плит или батарей отопления).
- 6) Вновь закрепить текстильные набивки на отрезе.

Рама ортеза

- 1) Следует протирать детали влажной тканью по мере необходимости.
- 2) Следует сушить изделие на воздухе. Не подвергать воздействию высоких температур (например, прямые солнечные лучи, тепло от кухонных плит или батарей отопления).

Срок службы

Срок службы ортезов не менее 5 лет

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Ортезы при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию температур от -10 °С до +60 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, без образования конденсата, при атмосферном давлении от 200 до 1500 гПа, вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс. Ортезы можно транспортировать в любом закрытом транспортном средстве. При транспортировке необходимо обеспечить защиту изделия от влажности.

Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов для температурного режима от +10 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80% и вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.

Упаковка

Изделия упаковываются в полиэтиленовые пакеты или картонные коробки, внутри которых есть руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Для целей транспортировки изделия упаковываются в общую картонную коробку.

Маркировка

Макет русскоязычного стикера

Расшифровка маркировочных символов

Символ	Расшифровка
	Производитель

	Дата производства
	Соответствие директиве ЕЕС 93/42
	Не утилизировать с бытовыми отходами
MEDICAL DEVICE CLASS 1	Медицинское изделие класса 1
SIZE / ROZMIAR	Размер
SIDE / STRONA	Сторона
Made in Poland	Сделано в Польше
Nr. ref:	Каталожный номер
	Обратитесь к инструкции по применению

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие качества изделий заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок годности изделий – 12 месяцев с даты производства, 6 месяцев с даты реализации.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения МИ

Использованные изделия и изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируются как бытовые отходы.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790 (класс Б).

Требования по охране окружающей среды

Ортезы при транспортировке, хранении и эксплуатации не наносят вреда окружающей среде.

/Перевод с польского языка на русский язык/

«REN4MAT Славомир Вронски»
Генеральный директор

Славомир Вронски

/Штамп:
REN4MAT
ВЛАДЕЛЕЦ
Славомир Вронски/
/подпись/

/Печать:
REN4MAT Славомир Вронски
36-060 Глогув Малопольски, ул. Пяски 47
Тел. 16621-41-35 тел/факс: 16621-42-13
ИНН: 8131804393 Реестр субъектов народного хозяйства: 180151618/

/Штамп:

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
БОГДАН РОЙОВСКИ
НОТАРИУС
БОГДАН ЧЕРВОНКА
НОТАРИУС
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
35-32 Жешув, ул. Замкова 9
ИНН: 813-37-81-114, тел.: 853-48-01/

Свидетельствую, что 22.04.2021 г. в Нотариальной конторе в г. Жешув, на ул. Замковой 9, Господин Славомир Рышард Вронски, сын Рышарда и Алисы, Персональный идентификационный номер 62011210715, проживающий под адресом: 35-321 Жешув, ул. На Скалы 5Б, владелец удостоверения личности номер AUE 145835, подписал настоящий документ.

Взыскано нотариальный сбор на основании §13 Постановления Министра Юстиции от 28.06.2004 г. (ЗВ № 148, п. 1564, с изменениями и дополнениями) в размере 20 злотых и налог НДС 23% от указанной суммы в размере 4,60 злотых.

Жешув, 22.04.2021 г.

Нотариальный реестр А номер 3597/2021

/Гербовая печать:

Богдан Червонка
Нотариус в г. Жешув
1

/Государственный герб Республики Польша/

/Штамп:

Богдан Червонка
НОТАРИУС/
/Подпись/

/Гербовая печать:

Богдан Червонка
Нотариус в г. Жешув
1

/Государственный герб Республики Польша/

/подпись/

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мукановым Глебом Борисовичем.

[Handwritten signature]

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого мая две тысячи двадцать первого года
Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика
Муканова Глеба Борисовича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2021- *07-2313*
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

Е.Д. Ребрина

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью *2* лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

[Handwritten signature]

