

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
USER MANUAL

Ортезы верхних конечностей «REN4MAT», в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»
«REN4MAT Sławomir Wroński» Польша

CEO

(должность/position)

Sławomir Wroński

(имя/name)

ren4mat

WŁAŚCICIEL

(подпись/signature)

М.П. / Stamp



REN4MAT Sławomir Wroński
36-050 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47
Tel. 16621-41-35 tel./fax 16621- 42-13
NIP: 8131804393 REGON: 180151618

10

KANCELARIA NOTARIALNA
BOGDAN ROJOWSKI
NOTARIUSZ
BOGDAN CZERWONKA
NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 9
NIP: 813-32-81-114 Tel. 853-48-01

Poświadczam, że w dniu 22.04.2021r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 9, Pan Sławomir Ryszard Wroński, syn Ryszarda i Alicji, Pesel 62011210715, zamieszkały 35-321 Rzeszów ul. Na Skąły 5B, legitymujący się dowodem osobistym numer AUE 145835, dokument niniejszy podpisał.-----

Pobrano takse notarialną na podstawie §.13 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564 ze zm.) w kwocie 20 złotych oraz podatek VAT 23% od tej kwoty w wysokości 4,60 złotych.-----

Rzeszów dnia 22.04.2021r.

Repertorium A numer 3695 /2021



Bogdan Czerwonka
NOTARIUSZ



1. Ортез на пальцы:

APARAT STACKA (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7)

AM-D-01 (размеры для правой и левой руки: M, L)

AM-D-01 (детский) (для правой и левой руки)

AM-D-02 (размеры: M, L)

AM-D-02 (детский) (для правой и левой руки)

AM-D-03 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

AM-D-04 (размеры для правой и левой руки: M, L)

AM-D-05 (размеры для правой и левой руки: M, L)

AM-SP-01 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-SP-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-SP-03 (для правой и левой руки)

AM-SP-04 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-SP-05 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-OSN-U-22 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

FIX-KG-14 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

2. Ортез на кисть:

AM-OSN-U-12 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

4ARMY-B-13 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав:

AS-N-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-OSN-U-03 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-L-03 (размеры для правой и левой руки: M, L)

AM-OSN-L-04 (размеры для правой и левой руки: M, L)

AM-OSN-U-04 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-U-05 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-SN-LM (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

AM-SN-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AS-NX-01 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AS-NX-02 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

EB-N (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

EB-N (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2)

EB-N-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

EB-N-01 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2)

EB-N-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

U-SN (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-OSN-U-01 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-U-01 (детский) (размеры: 1, 2)

AM-OSN-U-02 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-L-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-OSN-L-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-SDP-K-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

AM-SDP-K-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AS-N-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-OSN-U-06 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-U-07 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-U-08 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-OSN-U-01/CCA (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL)

AM-OSN-U-10 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-OSN-U-11 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-OSN-L-05 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)
AM-OSN-L-06 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L)
AM-OSN-U-16 (размеры для правой и левой руки: M, L)
FIX-KG-01 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-02 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-03 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-04 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-05 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-06 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-08 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-10 (размеры для правой и левой руки: 1, 2)
4ARMY-SN-10 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L)
4ARMY-SN-11 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SL-11 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
4ARMY-SL-13 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SL-15 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-10 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-11 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-12 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L)
4ARMY-B-14 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L)
OKG-19 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

4. Ортез на лучезапястный сустав:

AM-DON-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
MS-N-01 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
MS-N-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)
AM-SN-01 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AS-N (размеры для правой и левой руки: S, M, L)
AM-OSN-U-13 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-OSN-U-14 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-OSN-U-15 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-OSN-L-07 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-OSN-L-08 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-OSN-L-09 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-OSN-L-10 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SN-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SN-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-OSN-U-20 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
FIX-KG-07 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
FIX-KG-11 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)
FIX-KG-13 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
OKG-17 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SL-12 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SL-14 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-07 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-09 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
OKG-23 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
OKG-24 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
OKG-25 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
PCO-A-08 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)

OKG-20 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

5. Ортез на локтевой сустав:

AM-LX-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-SL-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

AM-LX-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

MS-L-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

MS-L-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

R4M-SL (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

R4M-SL-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AS-L (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AS-L-01 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)

AS-L-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-SL (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-SL-01/CCA (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AS-L/F (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AS-L/A (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-TL-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

AM-TL-01 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1)

U-SL (размеры для правой и левой руки: универсальный)

EB-L (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

OKG-04 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-KG-AR/1R (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

AM-KG-AR/1R (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2)

4ARMY-SL-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)

4ARMY-SL-03 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

4ARMY-SL-04 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)

4ARMY-SL-05 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)

FIX-KG-09 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)

FIX-KG-19 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2)

OKG-18 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

EB-L-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

4ARMY-SN-04 (размеры для правой и левой руки: M, L, XL)

4ARMY-SN-07 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

4ARMY-SN-09 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)

4ARMY-SN-13 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

4ARMY-SN-14 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

4ARMY-SL-06 (размеры для правой и левой руки: M, L, XL)

4ARMY-SL-07 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)

4ARMY-SL-08 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

4ARMY-SL-09 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

4ARMY-B-03 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

OKG-22 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

6. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы:

AM-KG-AM/1R (размеры для правой и левой руки: универсальный)

AM-KG-AM/1RE (размеры для правой и левой руки: универсальный)

FIX-KG-20 (размеры для правой и левой руки: 1, 2)

4ARMY-SN-12 (размеры для правой и левой руки: универсальный)

PCO-A-01 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)

PCO-A-02 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)

7. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы:

AS-PL (размеры для правой и левой руки: универсальный)
4ARMY-SL-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-OSN-U-17 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
EB-L-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-SN-06 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)
PCO-A-07 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)

8. Ортез на плечевой сустав:

AM-AO-KG-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L)
AM-AO-KG-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB-04 (размеры для правой и левой руки: M, L, XL)
AM-BX-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)
AM-BX-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-BX-03 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
MASTER-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)
OKG-01 (размеры для правой и левой руки: M, L)
OKG-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
OKG-03 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-KOB (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-KOB (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)
AS-B (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)
AM-AO-KG (размеры для правой и левой руки: универсальный)
4ARMY-B-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
FIX-KG-12 (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)
TB-02 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
TB-03 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
MASTER-04 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
4ARMY-SN-03 (размеры для правой и левой руки: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)
4ARMY-SN-05 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
4ARMY-SN-08 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
4ARMY-SN-15 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
4ARMY-SL-10 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL)
4ARMY-B-06 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
4ARMY-B-08 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
OKG-26 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
OKG-21 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB-03/AIR (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

9. Ортез на локтевой и плечевой суставы:

MASTER-03 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
AM-SOB-02 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-SOB-02 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)
AM-SOB-03 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-SOB-03 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2, 3)
4ARMY-B-04 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)
4ARMY-B-05 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

10. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы:

OKG-05 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

11. Ортез на всю руку:

AM-SL-03 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB-01 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB-05 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB-06 (размеры для правой и левой руки: универсальный)
AM-SOB-07 (размеры для правой и левой руки: M, L)
AM-SOB-07 (детский) (размеры для правой и левой руки: 1, 2)
MASTER-01 (размеры для правой и левой руки: S, M, L, XL)

Разработчик и производитель

REN4MAT Slawomir Wronski
(PEX4MAT Славомир Вронски)
ul. Piaski 47, 36-060 Glogow Malopolski, Poland
+48 16 621 42 20
biuro@reh4mat.com

Уполномоченный представитель

Общество с ограниченной ответственностью “МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС”
ООО “МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС”
Россия, 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.56, корпус 2, пом.2
8-495-565-32-02
e.bashlakov@medical-distributors.ru

Назначение

Накладываемое снаружи ортопедическое приспособление, разработанный для поддержки, предотвращения или коррекции деформаций/травм или для улучшения функции плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти или пальца

Условия/область применения

Ортезы следует применять исключительно в целях ортезирования верхних конечностей и только при условии отсутствия повреждений кожи в области ее контакта с изделием. Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями к применению.

Противопоказания

Во время использования ортеза в качестве обездвиживающей повязки (круглосуточно на протяжении 2-6 недель) – любые изменения установок необходимо согласовать с лечащим врачом. Не разрешается самостоятельно снимать ортез – можно лишь незначительно ослабить или сместить ленты

Слишком тесное наложение ортеза может примассати к ишемии пальцев, к ослаблению и/или нарушению чувствительности целой кисти или ее части

В случае кожных изменений в местах прилегания (повреждения кожного покрова, ранения, экземы кожи), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Использование ортеза ограничено – но возможно после наложения повязки

Необходимо особо контролировать правильное применение ортеза согласно рекомендациям врача — у детей, людей с нарушением памяти и психически больных.

Побочные действия

Отсутствуют

Классификация медицинского изделия

Медицинские изделия относятся к классу I в соответствии с требованиями директивы 93/42/ЕЕС. Оценка соответствия была осуществлена на основе Приложения VII Директивы

Риски применения медицинского изделия

В рамках процесса разработки изделия проводится Управление рисками для определения критических конструктивных элементов. Система Управления рисками охватывает сырье, изготовление, транспортировку и использование. Система Управления разработана на основе различных действий, связанных с использованием изделия. На уровне продукта выявляется возможное предсказуемое неправильное использование, виды неисправностей и воздействие, оценивается критичность и определяются профилактические меры. Данная система соответствует требованиям EN ISO 14971-2011

График распределения зависимости вероятности нанесения ущерба и последствий нанесенного ущерба после принятия мер по Анализу видов и последствий потенциальных несоответствий процесса производства.

Вероятность нанесения ущерба	Категория	Рейтинг вероятности	Приоритетный номер риска (область)					
	B7	Очень высокий						
	P6	Высокий						
	P5	Умеренно высокий						
	P4	Средний						
	P3	Низкий		3	1			
	P2	Очень низкий		2	25	25		
	P1	Отдаленный		1	5	3	3	
Ранг тяжести			Ничтожное	Малое	Серьёзное	Критическое	Критическое	Катастрофическое
Категория			S1	S2	S3	S4	S5	S6
			Тяжесть ущерба					

	Область недопустимых значений (необходимость введения защитных мероприятий)
	Пограничная зона (мероприятия по снижению рисков желательны)
	Область приемлемых значений (здесь риски приемлемы)

После того, как все меры по управлению риском были выполнены, все идентифицированные риски находятся в зоне «Приемлемо». В этом случае остаточный риск признан приемлемым и сообщение о наличии остаточного риска не потребуется.

Распознанные риски были снижены настолько, что остаточный риск является приемлемым. Действенность мероприятий по снижению рисков доказана проведёнными испытаниями и задокументирована.

Оценка рисков в отношении конструкции и выполняемых шагов процессов, выполняемых REN4MAT Slawomir Wronski, будет произведена:

- Всегда, когда мы узнаем о ситуациях, рисках или любую другую информацию (или по нашему продукту, или продуктам наших конкурентов, которые достаточно подобны нашим продуктам), которые потребуют проведения повторной оценки (наблюдение за рынком);
- Регулярно один раз каждые 2 года.

Вид контакта с организмом человека
Поверхностный контакт с кожей.

Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие полностью готово к эксплуатации. В техническом обслуживании не нуждается. В случае поломки или выходу из строя необходимо обратиться к уполномоченному представителю производителя.

Описание и технические характеристики медицинского изделия (Допустимые отклонения массогабаритных параметрах $\pm 10\%$)

АРАРАТ СТАСКА							
Общее описание Легкий гигиенический ортез для пальцев с наперстком для немедленного применения. Очень эффективен в терапии травм рук.							
Показания - отслоение связки выпрямителя дистальной фаланги, - растяжение межфалангового сустава, - переломы костей фаланг.							
Технические характеристики							
Размер 1 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 4,5 – 5,0 см	Размер 2 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 5,5 – 6,0 см	Размер 3 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 6,0 – 6,5 см	Размер 4 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 6,5 – 7,0 см	Размер 5 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 7,5 – 8,0 см	Размер 5.5 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 8,5 – 9,0 см	Размер 6 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 9,5 – 10,0 см	Размер 7 Обхват пальца в дистальном межфаланговом суставе 10,5 – 11,0 см

Габаритные размеры и масса

АРАРАТ СТАСКА, Размер 1	Д x Ш x Г (4.7 см, 2.9 см, 3 см). Масса 0,006 кг
-------------------------	--

APARAT STACKA, Размер 2	Д х Ш х Г (4.9 см, 3 см, 3 см). Масса 0,006 кг
APARAT STACKA, Размер 3	Д х Ш х Г (5 см, 3.1 см, 3 см). Масса 0,006 кг
APARAT STACKA, Размер 4	Д х Ш х Г (5.3 см, 3.2 см, 3 см). Масса 0,006 кг
APARAT STACKA, Размер 5	Д х Ш х Г (5.5 см, 3.3 см, 3 см). Масса 0,006 кг
APARAT STACKA, Размер 5.5	Д х Ш х Г (5.6 см, 3.4 см, 3 см). Масса 0,006 кг
APARAT STACKA, Размер 6	Д х Ш х Г (5.8 см, 3.5 см, 3 см). Масса 0,006 кг
APARAT STACKA, Размер 7	Д х Ш х Г (6 см, 3.5 см, 3 см). Масса 0,006 кг

AM-D-01		
Общее описание Изделие имеет открытую конструкцию, благодаря чему его легко надевать на конечность и регулирующую застежку, что делает ортез еще более универсальным и облегчает его подгонку по форме ладони. В ортезе есть лента, стабилизирующая большой палец, ее излишек после подгонки изделия нужно отрезать. А также изделие оборудовано алюминиевой боковой шиной с фиксатором для отведения большого пальца. Расстояние и способ отведения может быть подобран посредством изгиба шины соответствующим образом. Показания Травмы связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника), Ревматические изменения большого пальца, Острые и хронические дегенеративные изменения, такие как артрит. Технические характеристики		
Размер M, Обхват запястья 13-17 см	Размер L, Обхват запястья 17,5-21 см	

Габаритные размеры и масса

AM-D-01, Размер M,	Д х Ш х Г (21.5 см, 14 см, 2 см). Масса 0,078 кг
AM-D-01, Размер L,	Д х Ш х Г (23.5 см, 15.5 см, 2 см). Масса 0,095 кг

АМ-D-01 (детский)

Общее описание

Детский ортез большого пальца руки со специальной шиной, стабилизирующей седловый сустав большого пальца.

Показания


- 1 Вывих большого пальца (дислокация)
2. Болезнь (синдром) Де Кервена,
3. Травмы связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, тзв. «палец лыжника»),
4. Ревматические изменения пальца,
5. Острые и хронические дегенеративные изменения, такие как артроз.

Технические характеристики

Размер – 1

Обхват запястья

От 10 до 14 см.

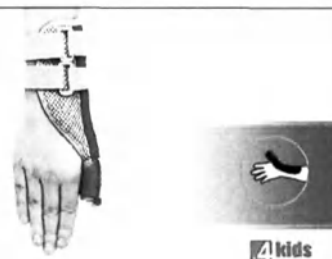

Габаритные размеры и масса

АМ-D-01 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (19 см, 10.5 см, 2.5 см). Масса 0,041 кг
-----------------------------	--

АМ-D-02

Общее описание

Универсальный ортез, который можно применять как на левую так и на правую ладонь, а также и на тыльную, и на внутреннюю сторону пальца. Изделие фиксирует пястно-фаланговый сустав и межфаланговые суставы пальцев.

Показания

- Травмы связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника),
- Ревматические изменения большого пальца,
- Острые и хронические дегенеративные изменения, такие как артрит.

Технические характеристики



Размер М

Расстояние от запястья до конца пальца 14 – 18 см

Обхват запястья
мин 13 – макс 26 см

Общая длина изделия 21 см

Размер L

Расстояние от запястья до конца пальца 18,5 – 22 см

Обхват запястья
мин 13 – макс 26 см

Общая длина изделия 26 см

Габаритные размеры и масса

АМ-D-02, Размер М	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 2 см). Масса 0,060 кг
АМ-D-02, Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 14 см, 2 см). Масса 0,065 кг

АМ-D-02 (детский)	
Общее описание Универсальный ортез пальца на левую и правую руку. Можно применять с внутренней и с тыльной стороны пальца. Иммобилизирует пястно-фаланговый сустав и межфаланговые суставы каждого пальца. Показания • Перелом пальцев II-V • Травмы коллатеральных связок пястно-фаланговых суставов пальцев II-V • Вывихи суставов пальцев II-V • Ревматические деформации пальцев II-V Технические характеристики	
Размер 1 Обхват запястья мин 10 — макс 14 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-D-02 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (15 см, 8 см, 4 см). Масса 0,028 кг
-----------------------------	---

AM-D-03**Общее описание**

Ортез на кисть для фиксации четырех пальцев кроме большого пальца руки.

Конструкция изделия позволяет пациенту или врачу выбрать который палец подлежит фиксации. Ортез позволяет иммобилизовать от одного до четырех пальцев.

С тыльной стороны ортеза есть четыре независимых кармана для шин на пальцы.

Показания

- При повреждении пальцев-разгибателей
- При повреждении фаланговых выпрямителей
- При некоторых видах переломов пястной, базальной и средней фаланг
- В случае травм суставов МІР и РІР, и / или мягких тканей пальца и пястной кости, требующих иммобилизации в вертикальном положении

Технические характеристики**Размер S**

Обхват пясти
17-19 см

Размер М

Обхват
пясти
19,5-22
см

Размер L

Обхват пясти
22,5-24 см

**Габаритные размеры и масса**

AM-D-03, Размер S	Д x Ш x Г (10.5 см, 11 см, 1.5 см). Масса 0,059 кг
AM-D-03, Размер M	Д x Ш x Г (11.5 см, 11.5 см, 1.5 см). Масса 0,050 кг
AM-D-03, Размер L	Д x Ш x Г (12.5 см, 12 см, 1.5 см). Масса 0,051 кг

Общее описание

Ортез большого пальца АМ-D-04 поддерживает седловидный сустав и метакарпофаланговый сустав при помощи специального металлического вкладыша анатомичной формы. Суставы полностью заключены в ортез, так что полностью защищены. Благодаря иммобилизации большого пальца выздоровление происходит быстрее. Ортез крепится при помощи застежек на липучках.

Показания

- разрыв локтевой коллатеральной связки первого пястно-фалангового сустава кисти (“палец лыжника”)
- нестабильность пястно-запястного и пястно-фалангового сустава большого пальца руки при ранней стадии остеоартрита
- вывихи суставов
- состояние после остеотомии I пястной кости, артропластики, трапезэктомии или реконструкции связок седловидного сустава
- Перелом Беннета и Роландо
- вывих седловидного сустава
- разрыв связок
- профилактически от травм мягких тканей

Технические характеристики

Размер М

Обхват запястья
13-17 см

Размер L

Обхват запястья
17-21 см



Габаритные размеры и масса

АМ-D-04, Размер М	Д х Ш х Г (11 см, 8 см, 6 см). Масса 0,041 кг
АМ-D-04, Размер L	Д х Ш х Г (13 см, 9 см, 6 см). Масса 0,043 кг

AM-D-05			
Общее описание Ортез кисти имеет модульную структуру и предназначен для иммобилизации пястных и фаланговых суставов 4 и/или 5 пальцев руки. Основная особенность данной модели заключается в ортопедической шине с возможностью регулировки положения. Основная особенность данной модели заключается в ортопедической шине с возможностью регулировки положения. Шина изготовлена из усиленного полиамида, а регулировка осуществляется с помощью ключа, входящего в комплектацию изделия. Ортез активно используется в процессе реабилитации после хирургических операций. Показания • Переломы костей запястья; • Травмы лучезапястного или запястно-пястных суставов; • Восстановительный период после операций на суставах; • Болевой синдром при артритах, артрозах, артралгиях. Технические характеристики <table border="1"> <tr> <td>Размер M Обхват запястья 13-17 см</td><td>Размер L Обхват запястья 17-21 см</td></tr> </table>		Размер M Обхват запястья 13-17 см	Размер L Обхват запястья 17-21 см
Размер M Обхват запястья 13-17 см	Размер L Обхват запястья 17-21 см		
			

Габаритные размеры и масса

AM-D-05, Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 13 мм, 5 см). Масса 0,130 кг
AM-D-05, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 16 мм, 5 см). Масса 0,156 кг

AM-SP-01	
Общее описание AM-SP-01 прекрасное средство при травмах кисти типа перелом боксера и других переломах и вывихов пальцев руки. Ортез иммобилизует нужный палец, позволяет позиционировать палец, контролировать движение пальцев, уровень стабилизации. Тыльное положение шины и ажурная конструкция позволяет применять ортез сразу после операции. Это самый универсальный ортез кисти при любых травмах, переломах пястных костей, растяжениях коллатеральных связок и травмах фаланги.	
	

Ортез является универсальным, может применяться на любой размер кисти, на левую и на правую руку, может иммобилизовать каждый палец кроме большого. Показания • Перелом IV-V пятой пястной кости (Перелом боксера) • Перелом I-III пятой пястной кости • Вывих II-V пятой пястной кости • Растяжение связок кисти Технические характеристики	
Размер Универсальный, подходит и на левую и на правую рук Обхват запястья мин 13 см — макс 26 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-SP-01, Размер универсальный	Д x Ш x Г (22 см, 12 см, 5 см). Масса 0,074 кг
--------------------------------	--

АМ-SP-02	
Общее описание Ортез большого пальца АМ-SP-02 имеет алюминиевую шину, которая стабилизирует седельный сустав большого пальца нейтральном положении. Шина обездвиживает только большой палец и запястье, оставляя другие пальцы свободными. Ортез имеет также дополнительный ремень на палец. Показания • Щелкающий палец / стенозирующий тендовагинит • Артрит большого пальца • Большой палец лыжника • Болезнь де Кервена • Большой палец лесника • Повреждение Стенера • Боли карпо-метакарпального сустава большого пальца Технические характеристики	
Размер Универсальный	

Обхват запястья мин 13 см — макс 26 см	
--	--

Габаритные размеры и масса

AM-SP-02, Размер универсальный	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 4 см). Масса 0,04 кг
---------------------------------------	---

AM-SP-03	
Общее описание Ортез AM-SP-03 отделяет пальцы друг от друга, не приводя к натираниям и пролежням. Эластичность материала позволяет динамическую и надежную стабилизацию сломанного пальца. Изнутри есть специальный антискользящий материал предотвращающий смещение ортеза. Ортез имеет форму петли, стабилизирует травмированный палец рядом со здоровым, благодаря чему ортез не перекручивается. Показания • Переломы пальцев II-V • Вывихи пальцев II-V • При травмах выпрямителей пальцев II-V • При травмах сухожилий пальцев II-V Технические характеристики Размер Ширина: 2,5см, 2,0см, 1,5см.	

Габаритные размеры и масса

AM-SP-03, Ширина 2,5см	Д x Ш x Г (15 см, 1,5 см, 2,5 см) Масса 0,008 кг
AM-SP-03, Ширина 2,0см	Д x Ш x Г (15 см, 2,0см, 2,5 см) Масса 0,008 кг
AM-SP-03, Ширина 1,5см	Д x Ш x Г (15 см, 2,5 см, 2,5 см) Масса 0,008 кг

AM-SP-04

Общее описание

Ортез AM-SP-04 стабилизирует запястно-пястный сустав большого пальца кисти (седловидный), а также запястье. Ортез не имеет внутренних жестких элементов и поэтому не ограничивает подвижности суставов, благодаря чему ее можно применять при занятиях спортом.

Показания

- разрыв связки большого пальца (палец лыжника)
- нестабильность карповаскулярного сустава большого пальца при раннем остеоартрите
- вывихи пальцев
- подвывих седловидного сустава
- растяжение связок
- профилактически для предотвращения травм

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват большого пальца 5-6 см	Обхват большого пальца 6,5-7,5 см	Обхват большого пальца 8-9 см	Обхват большого пальца 9,5-11 см



Габаритные размеры и масса

AM-SP-04, Размер S	Д x Ш x Г (13 см, 12 см, 3.5 см). Масса 0,042 кг
AM-SP-04, Размер M	Д x Ш x Г (15 см, 15 см, 3.5 см). Масса 0,045 кг
AM-SP-04, Размер L	Д x Ш x Г (15 см, 17 см, 3.5 см). Масса 0,038 кг
AM-SP-04, Размер XL	Д x Ш x Г (15 см, 19 см, 3.5 см). Масса 0,041 кг

АМ-SP-05	
Общее описание Ортез большого пальца АМ-SP-05 это продукт, предназначенный для всех активных людей. Глубокая вырезка для рук позволяет поддерживать все виды деятельности и не ограничивает функцию захвата руки. Специальная система негибких поперечных ремней предотвращает чрезмерное посещение большого пальца, тем самым защищая связку UCL от надрыва и разрыва. Дополнительная петля на большом пальце стабилизирует и позиционирует изделие на руке, предотвращая его непроизвольное скольжение. Показания • разрыв локтевой связки пястно-фалангового сустава большого пальца (так называемый "большой палец лыжника", "большой палец Gamekeeper") • нестабильность пястно-запястного и пястно-фалангового суставов большого пальца при раннем остеоартрозе • вывих суставов • скручивание седловидного сустава большого пальца • разрыв сухожилий мышц • профилактически для защиты от травм мягких тканей в спорте и повышенной физической активности. Технические характеристики Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

АМ-SP-05, Размер универсальный	Д x Ш x Г (11 см, 12 см, 4 см). Масса 0,02 кг
--------------------------------	---

АМ-OSN-U-22	
Общее описание Ортез АМ-OSN-U-22 имеет высококачественную алюминиевую шину, иммобилизующую седловидный сустав большого пальца. Благодаря этому связки лучше и быстрее заживают. Шине можно придать нужную форму. Открытая конструкция ортеза облегчает его наложение и позволила выполнить изделие в одном универсальном размере. Ортез подходит и на левую и на правую руку. Ортез можно точно подогнать под кисть. Слегка эластичный материал имеет терморегулирующие свойства что ускоряет заживание. Ортез значительно	

комфортнее для пациента чем традиционная гипсовая иммобилизация. Показания • Растяжение связок большого пальца руки • Вывих большого пальца руки • Щелкающий палец • Воспаление сустава большого пальца • Большой палец лыжника • Синдром де Кервена • Большой палец игрока • Повреждение типа Stener (палец егеря) • Боль в пястном суставе большого пальца Технические характеристики Размер Универсальный Обхват запястья мин 11 – макс 22 см	
---	--

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-22, Размер универсальный	Д x Ш x Г (18 см, 10 см, 2.5 см). Масса 0,038 кг
--	--

FIX-KG-14	
Общее описание Шинный ортез для рук FIX-KG-14-отличный ортез для травм рук и эффективный ортопедический инвентарь для переломов или вывихов отдельных пальцев рук. Ортез обездвиживает выбранные пальцы, позволяет устанавливать их произвольно, контролирует движения и позволяет установить правильный уровень их стабилизации. Дорсальная установка шины и ортеза позволяют использовать ее сразу же после операции. Это самый универсальный ручной ортез для использования при любых травмах рук, переломах пястной кости, повреждениях коллатеральной связки и травмах фаланг среди детей. Показания • перелом пальцев II-V • растяжение связок в пястной области • выбивание пальцев II-V • вывих пальцев II-V • раздавливание пальцы II-V Технические характеристики Размер - Универсальный, Окружность запястья - мин 9 см – макс 14 см, Подходит на возраст - 2 – 12 лет.	

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-14, Размер универсальный	Д x Ш x Г (18 см, 10 см, 4 см). Масса 0,04 кг
--	---

AM-OSN-U-12											
Общее описание Благодаря конструкции этот ортез уместается под перчатку лыжника. Может применяться профилактически или в качестве иммобилизации травмированного пальца. Не ограничивает движений запястья. Металлическая шина стабилизирует пястно-фаланговый сустав большого пальца и предотвращает резкое отведение и переразгибание большого пальца. Показания • разрыв локтевой коллатеральной связки пястно-фалангового сустава большого пальца — т. зв. «палец лыжника» • нестабильность пястно-фалангового сустава большого пальца в начале остеоартрита • вывих сустава • после остеотомии, эндопротезирования и реконструкции связок • Перелом Беннета или Роландо • тендинит мышц • профилактически, чтобы предотвратить повреждение мягких тканей Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th></tr> <tr> <td>Обхват запястья 13-15 см</td><td>Обхват запястья 15,5-17 см</td><td>Обхват запястья 17,5-19 см</td><td>Обхват запястья 19,5-21 см</td></tr> </table>		Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват запястья 13-15 см	Обхват запястья 15,5-17 см	Обхват запястья 17,5-19 см	Обхват запястья 19,5-21 см		
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL								
Обхват запястья 13-15 см	Обхват запястья 15,5-17 см	Обхват запястья 17,5-19 см	Обхват запястья 19,5-21 см								

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-12, Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 10 см, 6 см). Масса 0,057 кг
AM-OSN-U-12, Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11.5 см, 6 см). Масса 0,059 кг
AM-OSN-U-12, Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 13 см, 6 см). Масса 0,061 кг
AM-OSN-U-12, Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 14.5 см, 6 см). Масса 0,063 кг

4ARMY-B-13				
Общее описание Ортез большого пальца 4ARMY-B-13 поддерживает седловидный сустав. Суставы полностью заключены в ортез, так что полностью защищены. Благодаря иммобилизации большого пальца выздоровление происходит быстрее. Ортез крепится при помощи застежек на липучках. Ортез уменьшает боль. Показания • разрыв локтевой коллатеральной связки первого пястно-фалангового сустава кисти (“палец лыжника”) • нестабильность пястно-запястного и пястно-фалангового сустава большого пальца руки при ранней стадии остеоартрита • вывихи суставов • состояние после остеотомии I пястной кости, артропластики, трапезэктомии или реконструкции связок седловидного сустава • Перелом Беннета и Роландо • вывих седловидного сустава • разрыв связок • профилактически от травм мягких тканей.				
Технические характеристики				
Размер S Пястная окружность 17 – 19 см	Размер М Пястная окружность 19,5 – 22 см	Размер L Пястная окружность 22,5 – 25 см	Размер XL Пястная окружность 25,5 – 28 см	

Габаритные размеры и масса


4ARMY-B-13, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 22 см, 5 см). Масса 0,279 кг
4ARMY-B-13, Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 22.5 см, 5 см). Масса 0,283 кг
4ARMY-B-13, Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-13, Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 23.5 см, 5 см). Масса 0,288 кг

AS-N-02	
Общее описание В ортезе есть обводящий ремень запястья, обеспечивающий компрессию сустава и два эластичных ремешка на большой палец. Это позволяет устанавливать уровень отведения большого пальца. Ортез очень легко надевается и снимается	

самостоятельно.			
Показания • после травм лучезапястного сустава • тендобурсит • дегенеративные, перегрузочные и воспалительные изменения • профилактически в спорте			
Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват запястья 17 — 19 см	Обхват запястья 19,5 — 22 см	Обхват запястья 22,5 — 25 см	Обхват запястья 25,5 — 28 см

Габаритные размеры и масса

AS-N-02, Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 12 см, 3.5 см). Масса 0,037 кг
AS-N-02, Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 13 см, 3.5 см). Масса 0,039 кг
AS-N-02, Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 14 см, 3.5 см). Масса 0,040 кг
AS-N-02, Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 14.5 см, 3.5 см). Масса 0,041 кг

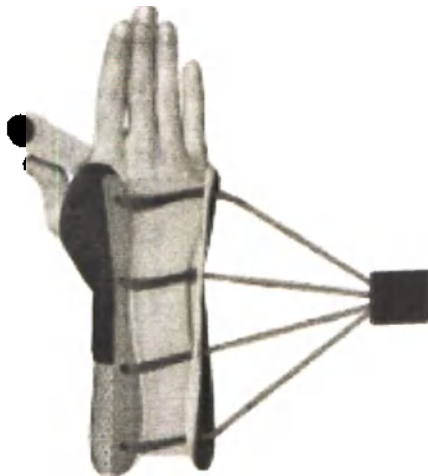AM-OSN-U-03	
Общее описание Шнурованный ортез имеет анатомическую форму, обеспечивает фиксацию пальцев, радиально-запястного сустава и запястья. Конструкция ортеза предотвращает карпальный (кистевой) туннельный синдром. В ладонной части находится мягкая эластичная подушечка улучшающая комфорт, а также гибкая и съемная анатомическая ладонная шина, которая имеет порошковую защиту от пота. На тыльной стороне находятся 2 пластиковые вставки, которые вместе с ладонным ремнем создают 3-точечную фиксацию и разгрузку лучезапястного сустава. Изделие фиксируется на запястье при помощи системы шнуровок и ремней, на окончаниях которых есть пластиковые наконечники, облегчающие расстегивание пациентам с дисфункциями рук.	

Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте					
Технические характеристики					
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Обхват запястья 11-13 см	Обхват запястья 13,5-15 см	Обхват запястья 15,5-17 см	Обхват запястья 17,5-19 см	Обхват запястья 19,5-21 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-03, Размер XS	Д x Ш x Г (23 см, 10 см, 5.5 см). Масса 0,104 кг
AM-OSN-U-03, Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 11 см, 5.5 см). Масса 0,105 кг
AM-OSN-U-03, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 12 см, 5.5 см). Масса 0,107 кг
AM-OSN-U-03, Размер L	Д x Ш x Г (24.5 см, 13 см, 5.5 см). Масса 0,109 кг
AM-OSN-U-03, Размер XL	Д x Ш x Г (24.5 см, 14 см, 5.5 см). Масса 0,110 кг

AM-OSN-L-03	
Общее описание Ортез запястья AM-OSN-L-03-это профессиональное медицинское устройство, обеспечивающее отличную и идеальную стабилизацию. Ортез имеет алюминиевые вставки, которые обездвиживают маленькие кости запястья, лучезапястный сустав. Ортез имеет быструю систему крепления. Отдельные шнурки охватывают всю длину ортеза и соединяются друг с другом одной застежкой-липучкой. Шнурки обеспечивают идеальную стабилизацию и регулируемое сжатие. На задней стороне ортеза используется узкая алюминиевая вставка, которая обеспечивает дополнительную стабилизацию конечности.	
Показания • вывих запястья, • после перенесенных травм радиально-	

запястного сустава, • при бурсите • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях, • растяжение запястья.		
Технические характеристики		
Размер М	Размер L	
Окружность запястья	Окружность запястья	
мин 13 – макс 17 см	мин 17,5 – макс 24 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-03, Размер М	Д х Ш х Г (23 см, 11.5 см, 4 см). Масса 0,130 кг
AM-OSN-L-03, Размер L	Д х Ш х Г (24 см, 13 см, 4 см). Масса 0,132 кг

AM-OSN-L-04	
Общее описание Ортез запястья AM-OSN-L-04-Это профессиональное медицинское устройство, обеспечивающее отличную и идеальную стабилизацию. Ортез имеет длинную алюминиевую вставку, которая обездвиживает запястно-радиальный сустав и достигает середины предплечья. Ортез имеет быструю систему крепления. Отдельные шнурки охватывают всю длину ортеза и соединяются вместе в две застежки-липучки. Шнурки оплетают всю конечность, обеспечивая идеальную стабилизацию и регулируемое сжатие. На внешней стороне ортеза используется узкая алюминиевая вставка, которая обеспечивает дополнительную внешнюю стабилизацию конечности. Показания • дистальный перелом лучевой кости (перелом Коллеса, Смита) • после перенесенных травм радиально-запястного сустава	

• при бурсите • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • вывих запястья • растяжение запястья. Технические характеристики		
Размер М Обхват запястья мин 13 – макс 17 см	Размер L Обхват запястья мин 17,5 – макс 24 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSN-L-04,	Д х Ш х Г (29 см, 13 см, 4 см). Масса 0,175кг
АМ-OSN-L-04,	Д х Ш х Г (29 см, 15 см, 4 см). Масса 0,181кг

АМ-OSN-U-04	
Общее описание Шнурованный ортез имеет анатомическую форму, фиксирует пальцы, радиально-запястный сустав и запястье. В ладонной части находится мягкая эластичная подушечка улучшающая комфорт, а также гибкая и съемная анатомическая ладонная шина, которая имеет порошковую защиту от пота. На тыльной стороне находятся 2 пластиковые вставки, которые вместе с ладонным ремнем создают 3-точечную фиксацию и разгрузку лучезапястного сустава. Таким образом конструкция ортеза предотвращает карпальный (кистевой) туннельный синдром. Ортез имеет систему отведения большого пальца, состоящую из гибкой алюминиевой шины и ремней «на липучках», позволяющих регулировать степень отведения. Изделие фиксируется на запястье при помощи системы шнуровок и ремней, на окончаниях которых есть пластиковые наконечники, облегчающие расстегивание пациентам с дисфункциями рук (таких как остеоартрит). Показания • после перенесенных травм радиально-запястного	

сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте Технические характеристики					
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Обхват запястья 11-13 см	Обхват запястья 13,5-15 см	Обхват запястья 15,5-17 см	Обхват запястья 17,5-19 см	Обхват запястья 19,5-21 см	

Габаритные размеры и масса


AM-OSN-U-04, Размер XS	Д x Ш x Г (30 см, 9 см, 5 см). Масса 0,165 кг
AM-OSN-U-04, Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 9,5 см, 5 см). Масса 0,167 кг
AM-OSN-U-04, Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 10 см, 5 см). Масса 0,170 кг
AM-OSN-U-04, Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 11 см, 5 см). Масса 0,173 кг
AM-OSN-U-04, Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 11,5 см, 5 см). Масса 0,175 кг

AM-OSN-U-05	
Общее описание Ажурный ортез запястья имеет анатомическую форму, благодаря чему хорошо фиксирует радиально-запястный сустав и запястье. В нижней части изделия находится ладонная шина, имеющая анатомический профиль и порошковую защиту от пота, а в верхней части — 2 пластиковые пластины, которые вместе составляют 3 точки фиксации конечности. Это самый эффективный способ стабилизации. Ортез фиксируется на конечности при помощи трех ремней на предплечье и одного — на ладони. Широкий диапазон регулировки застегивания позволяет хорошо подогнать ортез на руке для оптимальной стабилизации. Показания • Дислокации лучезапястного сустава • Тендинит, тендовагинит • Кистевой туннельный синдром • Ревматоидный артрит • После травм, операций • Неврологические заболевания • Патологии требующих небольшой иммобилизации	

запястья Технические характеристики				
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-05, Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 11 см, 5 см). Масса 0,108 кг
AM-OSN-U-05, Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 12,5 см, 5 см). Масса 0,110 кг
AM-OSN-U-05, Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 5 см). Масса 0,111 кг
AM-OSN-U-05, Размер XL	Д x Ш x Г (24 см, 14,5 см, 5 см). Масса 0,113 кг

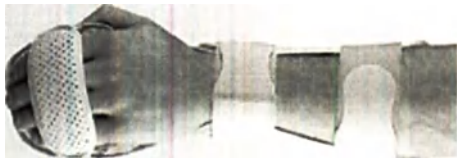AM-SN-LM			
Общее описание Шина на ладонь и предплечье с сепаратором пальцев полностью обновлена. Изменения коснулись конструкции жесткой шины, формы мягкой части. Изделие получило сепаратор пальцев. Благодаря нововведениям ортез лучше фиксирует пальцы, лучезапястный сустав, запястье. Изделие снабжено двумя широкими ремнями, обхватывающими предплечье и одним узким на ладонь. Степень их регулировки очень большая, что обеспечивает хорошее прилегание изделия и хорошую фиксацию. На окончаниях ремней имеются пластиковые концевки, облегчающие расстегивание для пациентов с дисфункциями верхних конечностей. Показания • вывихов лучезапястного сустава, • повреждения и воспаления сухожилий, • болезненных состояний запястья, • острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, • после других операций (ортопедия, ревматология), • неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, • при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки Технические характеристики			
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SN-LM, Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 17 см, 6 см). Масса 0,288 кг
AM-SN-LM, Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 19 см, 6 см). Масса 0,300 кг
AM-SN-LM, Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 21 см, 6 см). Масса 0,312 кг

AM-SN-02				
Общее описание Орtez снимает нагрузку с радиально-кистевго сустава и уменьшает боли. Орtez имеет анатомической формы шину запястья и эластический ремень дополнительно стабилизирующий сустав. Благодаря своей конструкции орtez имеет регулируемую силу фиксации. Показания • после травм лучезапястного сустава • тендинит, • изменения от перегрузок, дегенеративные, воспалительные • профилактика в спорте Технические характеристики				
Размер S Обхват пястной кости 17 — 19 см	Размер M Обхват пястной кости 19,5 — 22 см	Размер L Обхват пястной кости 22,5 — 25 см	Размер XL Обхват пястной кости 25,5 — 28 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SN-02, Размер S	Д x Ш x Г (16.5 см, 7 см, 4 см). Масса 0,073 кг
AM-SN-02, Размер M	Д x Ш x Г (17 см, 8 см, 4 см). Масса 0,075 кг
AM-SN-02, Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 9 см, 4 см). Масса 0,078 кг
AM-SN-02, Размер XL	Д x Ш x Г (17.5 см, 10.5 см, 4 см). Масса 0,081 кг

AS-NX-01																			
Общее описание Ортез имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше стабилизирует лучезапястный сустав и запястье. В нижней части изделия есть ладонная шина анатомической формы. В верхней части — 2 пластиковые вкладыша, которые вместе с ладонной шиной составляют 3 точки фиксации конечности. Это самый эффективный способ стабилизации запястья. Ортез крепится на руке при помощи двух ремней на предплечье и одного на кисти. Ортез имеет широкий диапазон регулировки. В ладонной части ортеза есть мягкая эластичная подушечка, улучшающая комфорт. Показания • после травм лучезапястного сустава • воспаления сухожилий, бурсит • дегенеративные и воспалительные деформации, и деформации от перегрузок • профилактика в спорте Технические характеристики <table><tr><td>Размер XS</td><td>Размер S</td><td>Размер M</td><td>Размер L</td><td>Размер XL</td></tr><tr><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td></tr><tr><td>11-13 см</td><td>13.5-15 см</td><td>15.5-17 см</td><td>17.5-19 см</td><td>19.5-21 см</td></tr></table>				Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	11-13 см	13.5-15 см	15.5-17 см	17.5-19 см	19.5-21 см	
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL															
Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья															
11-13 см	13.5-15 см	15.5-17 см	17.5-19 см	19.5-21 см															

Габаритные размеры и масса

AS-NX-01, Размер XS	Д х Ш х Г (23 см, 9.5 см, 4.5 см). Масса 0.094 кг
AS-NX-01, Размер S	Д х Ш х Г (23 см, 10 см, 4.5 см). Масса 0.096 кг
AS-NX-01, Размер M	Д х Ш х Г (24 см, 10.5 см, 4.5 см). Масса 0.100 кг
AS-NX-01, Размер L	Д х Ш х Г (24 см, 11 см, 4.5 см). Масса 0.103 кг
AS-NX-01, Размер XL	Д х Ш х Г (24 см, 11.5 см, 4.5 см). Масса 0.105 кг

AS-NX-02	
Общее описание Ортез имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше стабилизирует лучезапястный сустав и запястье. Ортез имеет регулируемую переднюю застежку, благодаря этому ортез универсальный, и легко адаптируется по форме кисти. В верхней части ортеза установлены два ортопедических вкладыша которые вместе с анатомической шиной ладони создают 3-точечную стабилизацию конечности. Это самый эффективный	

способ стабилизации запястья. Застегивается ортез при помощи двух широких ремней на предплечье и узкого ремня на кисть. Диапазон регулировки очень большой. Под ремнями защитная подкладка. Дополнительно в изделии есть алюминиевая боковая шина со стабилизатором, служащая для отведения большого пальца. Отведение регулируется путем выгибания шины для придания ей нужной формы. Для стабилизации большого пальца есть специальный ремень, излишек которого можно отрезать.

Показания

- после травм лучезапястного сустава
- воспаления сухожилий, бурсит
- дегенеративные и воспалительные деформации, и деформации от перегрузок
- профилактика в спорте

Технические характеристики

Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см
---	--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

AS-NX-02, Размер XS	Д x Ш x Г (26 см, 8,5 см, 4,5 см). Масса 0,149 кг
AS-NX-02, Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 9 см, 4,5 см). Масса 0,153 кг
AS-NX-02, Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 10 см, 4,5 см). Масса 0,157 кг
AS-NX-02, Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 11 см, 4,5 см). Масса 0,169 кг
AS-NX-02, Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 12,5 см, 4,5 см). Масса 0,175 кг

ЕВ-N	
Общее описание Ортез лучезапястного сустава выполнен двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента, растягивается во всех направлениях, отлично моделируя форму конечности — создаёт так называемую вторую кожу. Внешний слой из спандекса отвечает за соответствующую компрессию и оптимальный подбор изделия, сокращает мышечные колебания, возникающие во время физической нагрузки. Внутренняя мембрана из микрофибры, хлопчатника и эластана отвечает за поддержание соответствующего климата кожи и выведение влаги, её структура гарантирует бархатную мягкость в прикосновении. Изделие оснащено лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Показания	

• после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, циклокросс				
Технические характеристики				
Размер S Обхват пястной кости 17 — 19 см	Размер M Обхват пястной кости 19,5 — 22 см	Размер L Обхват пястной кости 22,5 — 25 см	Размер XL Обхват пястной кости 25,5 — 28 см	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-N, Размер S	Д х Ш х Г (12.5 см, 9 см, 3 см). Масса 0,027 кг
ЕВ-N, Размер M	Д х Ш х Г (13 см, 10 см, 3 см). Масса 0,029 кг
ЕВ-N, Размер L	Д х Ш х Г (13 см, 11 см, 3 см). Масса 0,031 кг
ЕВ-N, Размер XL	Д х Ш х Г (13.5 см, 12 см, 3 см). Масса 0,033 кг

ЕВ-N (детский)	
Общее описание Данная модель стабилизирует лучезапястный сустав, обхватывая его, как вторая кожа. Благодаря разумной компрессии и поддержке, ортез увеличивает силу хвата, что важно при занятии спортом (гимнастика, тяжелая атлетика, теннис, бадминтон и др.) Детский ортез запястья выпускается в двух размерах, отдельно на левую и правую руку. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима	

и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, циклокросс Технические характеристики		
Размер I Обхват запястья 9-11 см	Размер I Обхват запястья 11-13 см	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-N (детский), Размер I	Д x Ш x Г (10 см, 7 см, 3 см). Масса 0,018 кг
ЕВ-N (детский), Размер I	Д x Ш x Г (10.5 см, 8 см, 3 см). Масса 0,021 кг

ЕВ-N-01	
Общее описание Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Ортез лучезапястного сустава выполнен двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента, растягивается во всех направлениях, отлично моделируя форму конечности — создаёт так называемую вторую кожу. Внешний слой из спандекса отвечает за соответствующую компрессию и оптимальный подбор изделия, сокращает мышечные колебания, возникающие во время физической нагрузки. Внутренняя мембрана из микрофибры, хлопчатника и эластана отвечает за поддержание соответствующего климата кожи и выведение влаги, её структура гарантирует бархатную мягкость в прикосновении. Изделие оснащено лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава; после перенесенных переломов кости предплечья (позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам). • при хронических болевых синдромах от перегрузки и воспалительных изменений в области лучезапястного сустава • при прогрессирующих дегенеративных изменениях лучезапястного сустава и запястья вследствие посттравматических, перегрузочных и воспалительных изменений – значительно улучшает функцию руки и позволяет выполнять повседневные дела дома и на работе • при парезе верхней конечности – стабилизация запястья в функциональном положении, повышает трудоспособность руки Технические характеристики	

Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	
--	--	--	---	--

Габаритные размеры и масса

ЕВ-N-01, Размер S	Д x Ш x Г (17 см, 9 см, 4.5 см). Масса 0,052 кг
ЕВ-N-01, Размер M	Д x Ш x Г (17 см, 9.5 см, 4.5 см). Масса 0,055 кг
ЕВ-N-01, Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 10 см, 4.5 см). Масса 0,058 кг
ЕВ-N-01, Размер XL	Д x Ш x Г (17 см, 10.5 см, 4.5 см). Масса 0,061 кг

ЕВ-N-01 (детский)				
Общее описание Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Ортез лучезапястного сустава выполнен двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента, растягивается во всех направлениях, отлично моделируя форму конечности — создаёт так называемую вторую кожу. Внешний слой из спандекса отвечает за соответствующую компрессию и оптимальный подбор изделия, сокращает мышечные колебания, возникающие во время физической нагрузки. Внутренняя мембрана из микрофибры, хлопчатника и эластана отвечает за поддержание соответствующего климата кожи и выведение влаги, её структура гарантирует бархатную мягкость в прикосновении. Изделие оснащено лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, циклокросс Технические характеристики <table><tr><td>Размер I Обхват запястья 9-11 см</td><td>Размер I Обхват запястья 11-13 см</td></tr></table>		Размер I Обхват запястья 9-11 см	Размер I Обхват запястья 11-13 см	
Размер I Обхват запястья 9-11 см	Размер I Обхват запястья 11-13 см			

Габаритные размеры и масса

ЕВ-N-01 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (16 см, 9 см, 3.5 см). Масса 0,049 кг
ЕВ-N-01 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (16 см, 12 см, 3.5 см). Масса 0,054 кг

ЕВ-N-02				
Общее описание Изделие оснащено анатомически профилированной шиной, фиксирующей запястье, а также лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава; после перенесенных переломов кости предплечья (позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам). • при хронических болевых синдромах от перегрузки и воспалительных изменений в области лучезапястного сустава • при прогрессирующих дегенеративных изменениях лучезапястного сустава и запястья вследствие посттравматических, перегрузочных и воспалительных изменений – значительно улучшает функцию руки и позволяет выполнять повседневные дела дома и на работе • при парезе верхней конечности – стабилизация запястья в функциональном положении, повышает трудоспособность руки Технические характеристики				
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-N-02, Размер S	Д x Ш x Г (18 см, 9 см, 4.5 см). Масса 0,091 кг
ЕВ-N-02, Размер M	Д x Ш x Г (18 см, 9.5 см, 4.5 см). Масса 0,094 кг
ЕВ-N-02, Размер L	Д x Ш x Г (18 см, 10 см, 4.5 см). Масса 0,096 кг
ЕВ-N-02, Размер XL	Д x Ш x Г (18 см, 11.5 см, 4.5 см). Масса 0,100 кг

U-SN

Общее описание

Универсальный ортез лучезапястного сустава.

Ортез U-SN отлично стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Он поправляет хватательную функцию кисти, увеличивает силу зажима особенно при силовых хватках (например, теннис, тяжелая атлетика); смягчает болевые симптомы, вызванные перегрузкой, перенесенными травмами и дегенеративными изменениями. Благодаря поддержанию устойчивой температуры и эластичной компрессии ортез способствует уменьшению отеков, рассасыванию выпотов и гематом после перенесенных травм. Это позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам.



Показания

- при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава;
- после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья)
- при воспалительных процессах сухожильных сумок;
- при хронических перегрузочных и воспалительных состояниях надмыщелков плечевой кости (локоть теннисиста) – уменьшает интенсивность заболевания;
- для профилактики в спорте: теннис, тяжелая атлетика, волейбол, велокросс.

Технические характеристики

Размер Универсальный
Обхват запястья
мин 13 см - макс 20 см

Габаритные размеры и масса

U-SN, Размер Универсальный

Д x Ш x Г (13 см, 11 см, 3.5 см). Масса 0,048 кг

AM-OSN-U-01

Общее описание

Изделие состоит из медицинского ламината с потоотводящими свойствами снаружи, полужесткой перфорированной комфортной пены, а к коже прилегает «дышащая» хлопковая махровая ткань фротте.

Благодаря открытой конструкции ортеза и передней застежке он легко одевается и приспособливается к запястью.

В ортезе используется анатомическая ладонная шина, которая имеет гальваническую защиту от пота.

Показания

- Тугор запястья следует применять в случаях:
- вывихов лучезапястного сустава,
- повреждения и воспаления сухожилий,
- болезненных состояний запястья,
- острых или хронических воспалений запястья или пястных костей,
- после других операций (ортопедия, ревматология),
- неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения,
- для профилактики во время занятия спортом или выполнения тяжелой физической работы.

Технические характеристики

Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват запястья 11-13 см	Обхват запястья 13,5-15 см	Обхват запястья 15,5-17 см	Обхват запястья 17,5-19 см	Обхват запястья 19,5-21 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-01, Размер XS	Д x Ш x Г (23.5 см, 9 см, 5 см). Масса 0,090 кг
AM-OSN-U-01, Размер S	Д x Ш x Г (24.5 см, 10 см, 5 см). Масса 0,096 кг
AM-OSN-U-01, Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 11 см, 5 см). Масса 0,100 кг
AM-OSN-U-01, Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 12 см, 5 см). Масса 0,105 кг
AM-OSN-U-01, Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 5 см). Масса 0,109 кг

АМ-OSN-U-01 (детский)		
Общее описание Изделие состоит из медицинского ламината с потоотводящими свойствами снаружи, полужесткой перфорированной комфортной пены, а к коже прилегает «дышащая» хлопковая махровая ткань фротте. Благодаря открытой конструкции ортеза и передней застежке он легко одевается и приспособляется к запястью. В ортезе используется анатомическая ладонная шина, которая имеет гальваническую защиту от пота. Показания • Тугор запястья следует применять в случаях: • вывихов лучезапястного сустава, • повреждения и воспаления сухожилий, • болезненных состояний запястья, • острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, • после других операций (ортопедия, ревматология), • неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, • для профилактики во время занятия спортом или выполнения тяжелой физической работы. Технические характеристики		
Размер 1 Обхват запястья 9-11 см	Размер 2 Обхват запястья 11-13 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSN-U-01 (детский), Размер 1	Д x Ш x Г (16 см, 7 см, 2.5 см). Масса 0,045 кг
АМ-OSN-U-01 (детский), Размер 2	Д x Ш x Г (16 см, 11 см, 2.5 см). Масса 0,051 кг

Общее описание

Открытый ортез запястья изготовлен в новой анатомической форме, благодаря чему лучше стабилизирует радиально-запястный сустав и запястье.

Изделие имеет открытую конструкцию, а также переднюю регулируемую застежку, что облегчает его надевание по форме ладони.

В верхней части имеются два ортопедических вкладыша, которые с ладонной шиной создают в разрезе три точки фиксации конечности.

Застежки состоят из 2 широких обтягивающих ремней и одного узкого ладонного ремня и имеют очень широкий диапазон регулировки.

В ладонной части находится мягкая эластичная подушечка улучшающая комфорт. Конструкция ортеза предотвращает карпальный (кистевой) туннельный синдром.

Изделие имеет ремень для фиксации большого пальца, излишек которого после надевания можно отрезать, а также боковую алюминиевую шину со стабилизатором, выполняющую функцию отведения большого пальца. Ее можно изогнуть чтобы получить желаемый степень отведения.

На окончаниях ремней есть пластиковые наконечники, облегчающие расстегивание пациентам с дисфункциями рук.

Показания

- вывихов лучезапястного сустава,
- повреждения и воспаления сухожилий,
- болезненных состояний запястья,
- острых или хронических воспалений запястья или пястных костей,
- после других операций (ортопедия, ревматология),
- неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения,
- при нестабильности лучезапястного сустава или большого пальца
- при долечивании после переломов кости предплечья и кисти

Противопоказания

- свежих ран
- повреждения эпидермиса
- экзем кожи
- аллергии кожи

Технические характеристики

Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	
---	--	--	--	---	--

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-02 Размер XS	Д x Ш x Г (30 см, 9,5 см, 5 см). Масса 0,159 кг
AM-OSN-U-02 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 10 см, 5 см). Масса 0,162 кг
AM-OSN-U-02 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 11 см, 5 см). Масса 0,166 кг
AM-OSN-U-02 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 12 см, 5 см). Масса 0,170 кг
AM-OSN-U-02 Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 13 см, 5 см). Масса 0,175 кг

AM-OSN-L-01				
Общее описание Изделие оснащено анатомически смоделированной алюминиевой ложкой, а также двумя боковыми ребрами жесткости, фиксирующими запястье, лучезапястный сустав и частично предплечье. Изделие снабжено четырьмя фиксирующими ремнями, изготовленными из ленты VELCRO, задачей которых является оптимально подогнать шину по размеру конечности и зафиксировать его на руке. Большой палец остается свободным.				
Показания - вывихов лучезапястного сустава, - повреждения и воспаления сухожилий, - болезненных состояний запястья, - острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, - после других операций (ортопедия, ревматология), - неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, - при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки				
Технические характеристики				
Размер S Обхват запястья 13-15 см Длинна 30 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см Длинна 35 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см Длинна 38 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см Длинна 38 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-01 Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 75 см, 7 см). Масса 0,296 кг
AM-OSN-L-01 Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 80 см, 7 см). Масса 0,307 кг
AM-OSN-L-01 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 90 см, 7 см). Масса 0,317 кг
AM-OSN-L-01 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 95 см, 7 см). Масса 0,323 кг

AM-OSN-L-02

Общее описание

Длинный ортез запястья с отведением большого пальца теперь имеет новую, более анатомическую форму, благодаря чему лучше стабилизирует пальцы, лучезапястный сустав и запястье.

Его особенность в том, что он не эластичен, в следствие чего бандаж лучше стабилизирует суставы. Изделие состоит со стороны кожи из «дышащей» хлопковой ткани фротте, из медицинского ламината с потоотводящими свойствами снаружи, который имеет дополнительно перфорацию для лучшего потоотведения и полужесткой перфорированной комфортной пены между ними.

В ладонной части ортеза находится эластичная подушечка улучшающая комфорт. Конструкция ортеза предотвращает карпальный (кистевой) туннельный синдром. В нижней части имеется длинная алюминиевая шина на ладонь, имеющая анатомическую форму и защиту от воздействия пота. В верхней части — две пластиковые шины с отверстиями, которые вместе с ладонной шиной составляют в разрезе 3 точки фиксации верхней конечности. Это самый эффективный способ стабилизации.

Дополнительным элементом этого ортеза является система отведения большого пальца, состоящая из алюминиевой шины большого пальца вмонтированная в боковой карман и мягкий сепаратор пальцев, который уменьшает болевые ощущения от контакта пальцев между собой и предотвращает натирания, а также помогает удерживать пальцы в нужном положении.

Показания

- вывихов лучезапястного сустава,
- повреждения и воспаления сухожилий,
- болезненных состояний запястья,
- острых или хронических воспалений запястья или пястных костей,
- после других операций (ортопедия, ревматология),
- неврологических заболеваний центрального или



периферического происхождения, - при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки - при долечивании после снятия гипсовой повязки (предплечье, кисть)				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват	
запястья	запястья	запястья	запястья	
13-15 см	15,5-17 см	17,5-19 см	19,5-21 см	
Длина 30 см	Длина 35 см	Длина 38 см	Длина 38 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-OSN-L-02 Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 9 см, 7 см). Масса 0,366 кг
АМ-OSN-L-02 Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 11 см, 7 см). Масса 0,376 кг
АМ-OSN-L-02 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 13 см, 7 см). Масса 0,382 кг
АМ-OSN-L-02 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 15 см, 7 см). Масса 0,390 кг

АМ-SDP-K-01	
Общее описание Коррекционная шина на ладонь и предплечье с сепаратором пальцев подверглась полной модернизации. Изменения коснулись как конструкции пластичной шины, так и мягкой части ортеза. Изделие получило сепаратор пальцев. Благодаря этим изменениям ортез лучше стабилизирует пальцы, лучезапястный сустав и запястье. Показания - вывихов лучезапястного сустава, - повреждения и воспаления сухожилий, - болезненных состояний запястья, - острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, - после других операций (ортопедия, ревматология), - неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, - при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки Противопоказания - свежие раны - повреждения эпидермиса - экзема кожи	

- аллергии кожи			
Технические характеристики			
Размер S Обхват запястья 13-15 см Длина 30 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см Длина 36 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см Длина 40 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SDP-K-01 Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 15 см, 5 см). Масса 0,23 кг
AM-SDP-K-01 Размер M	Д x Ш x Г (40 см, 17 см, 5 см). Масса 0,25 кг
AM-SDP-K-01 Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 19 см, 5 см). Масса 0,26 кг

AM-SDP-K-02				
Общее описание Застегивание при помощи системы двух широких повязок, обхватывающих предплечье, одной широкой повязки на запястье, двух узких ремней на ладонь и одного — на большой палец. Очень широкие возможности регулировки застегивания, а, следовательно, изделие хорошо приспособливается к руке и надежно фиксирует. Имеется мягкий сепаратор пальцев, который редуцирует болевые ощущения, защищает от натирания и удерживает пальцы в правильном положении. Сверху ладонь фиксируется мягкой повязкой, прижимающей пальцы к стабилизатору. Показания • После перенесенных травм предплечья и руки лечили консервативно и оперативно. • После оперативного лечения в области предплечья и руки по болезненным причинам. • При парезах руки или верхней конечности-предотвращает образование и облегчает лечение существующих контрактур. Технические характеристики				
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SDP-K-02 Размер S	Д x Ш x Г (40 см, 14 см, 8 см). Масса 0,215 кг
AM-SDP-K-02 Размер M	Д x Ш x Г (41 см, 15 см, 8 см). Масса 0,222 кг
AM-SDP-K-02 Размер L	Д x Ш x Г (41 см, 16 см, 8 см). Масса 0,229 кг
AM-SDP-K-02 Размер XL	Д x Ш x Г (41 см, 16.5 см, 8 см). Масса 0,235 кг

AS-N-01				
Общее описание Ортез AS-N-01 характеризуется умеренным согреванием и компрессией в сочетании с идеальным гашением энергии удара, а эластичная застежка позволяет индивидуально регулировать фиксацию запястья. Показания • после травм лучезапястного сустава • бурсит • дегенерации и воспаление сустава • профилактика в спорте Технические характеристики				
Размер S Обхват пястной кости 17-19 см	Размер M Обхват запястья 19,5-22 см	Размер L Обхват запястья 22,5-25 см	Размер XL Обхват запястья 15,5-28 см	

Габаритные размеры и масса

AS-N-01 Размер S	Д x Ш x Г (12 см, 10 см, 3.5 см). Масса 0,029 кг
AS-N-01 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 3.5 см). Масса 0,032 кг
AS-N-01 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 3.5 см). Масса 0,034 кг
AS-N-01 Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 13 см, 3.5 см). Масса 0,036 кг

Общее описание

Открытый ортез запястья и предплечья имеет анатомическую форму, стабилизирует запястье и лучезапястный сустав.

Благодаря открытой конструкции ортеза и передней застежке он легко одевается и приспособливается к запястью.

Фиксатор сустава дополнительно оснащен мягкой эластичной подушкой в дистальной области, что улучшает комфорт.


На концах ремней «на липучках» велкро есть концевки, облегчающие застегивание пациентам с частичной дисфункцией.

В ортезе используется анатомическая ладонная шина, которая имеет гальваническую защиту от пота.

Показания

Ортез следует применять в случаях:

- - вывихов лучезапястного сустава,
- - повреждения и воспаления сухожилий,
- - болезненных состояний запястья,
- - острых или хронических воспалений запястья или пястных костей,
- - после других операций (ортопедия, ревматология),
- - неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения,
- - для профилактики во время занятия спортом или выполнения тяжелой физической работы.

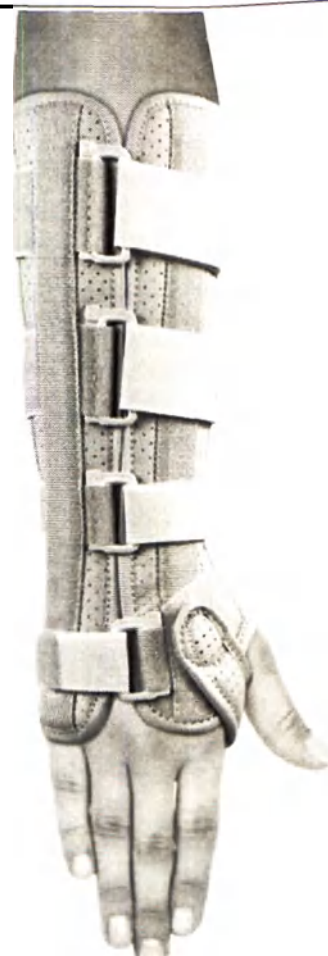

Технические характеристики

Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья
11-13 см	13,5-15 см	15,5-17 см	17,5-19 см	19,5-21 см
Длина 26 см	Длина 26 см	Длина 29 см	Длина 32 см	Длина 32 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-06 Размер XS	Д x Ш x Г (26 см, 12 см, 6.5 см). Масса 0,130 кг
AM-OSN-U-06 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 13 см, 6.5 см). Масса 0,133 кг
AM-OSN-U-06 Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 13.5 см, 6.5 см). Масса 0,139 кг
AM-OSN-U-06 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 14 см, 6.5 см). Масса 0,144 кг
AM-OSN-U-06 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 15 см, 6.5 см). Масса 0,149 кг

Общее описание

Ортез предплечья изготовлен в новой анатомической форме, благодаря чему лучше стабилизирует радиально-запястный сустав и запястье.

Изделие имеет открытую конструкцию, а также переднюю регулируемую застежку, что облегчает его надевание по форме ладони.

В верхней части имеются два ортопедических вкладыша, которые с ладонной шиной создают в разрезе три точки фиксации конечности.

Застежки состоят из 2 широких обтягивающих ремней и одного узкого ладонного ремня и имеют очень широкий диапазон регулировки.

Изделие имеет ремень для фиксации большого пальца, излишек которого после надевания можно отрезать, а также боковую алюминиевую шину со стабилизатором, выполняющую функцию отведения большого пальца. Ее можно изогнуть чтобы получить желаемый степень отведения.

На окончаниях ремней есть пластиковые наконечники, облегчающие расстегивание пациентам с дисфункциями рук.

Показания

Ортез следует применять в случаях:

- вывихов лучезапястного сустава,
- повреждения и воспаления сухожилий,
- болезненных состояний запястья,
- острых или хронических воспалений запястья или пястных костей,
- после других операций (ортопедия, ревматология),
- неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения,
- при нестабильности лучезапястного сустава или большого пальца
- при долечивании после переломов кости предплечья и кисти
-

Технические характеристики

Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья
11-13 см	13,5-15 см	15,5-17 см	17,5-19 см	19,5-21 см
Длина 26 см	Длина 26 см	Длина 29 см	Длина 32 см	Длина 32 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-07 Размер XS	Д x Ш x Г (26 см, 10 см, 6.5 см). Масса 0,186 кг
AM-OSN-U-07 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 11.5 см, 6.5 см). Масса 0,190 кг
AM-OSN-U-07 Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 13 см, 6.5 см). Масса 0,201 кг
AM-OSN-U-07 Размер L	Д x Ш x Г (39 см, 14 см, 6.5 см). Масса 0,208 кг
AM-OSN-U-07 Размер XL	Д x Ш x Г (39 см, 15.5 см, 6.5 см). Масса 0,215 кг

AM-OSN-U-08				
Общее описание Универсальный ортез запястья AM-OSN-U-08 имеет съемную шину и обхватывающий ремень и подходит и для левой и для правой руки. Обхватывающий ремень и застежки на липучках обеспечивают дополнительную стабилизацию. Показания Ортез следует применять в случаях: • для иммобилизации при травме запястья (перелом, растяжение) • при воспалении сухожилий • нестабильность лучезапястного сустава • перегрузочные, дегенеративные и воспалительные деформации • профилактика в спорте Технические характеристики				
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-20 см	Размер XL Обхват запястья 20,5-23 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-08 Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 9 см, 3.5 см). Масса 0,067 кг
AM-OSN-U-08 Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 10 см, 3.5 см). Масса 0,072 кг
AM-OSN-U-08 Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 11 см, 3.5 см). Масса 0,077 кг
AM-OSN-U-08 Размер XL	Д x Ш x Г (22 см, 12 см, 3.5 см). Масса 0,081 кг

AM-OSN-U-01/CCA																				
Общее описание Открытый ортез запястья имеет анатомическую форму, стабилизирует запястье и лучезапястный сустав. Показания Ортез следует применять в случаях: • для иммобилизации при травме запястья (перелом, растяжение) • при воспалении сухожилий • нестабильность лучезапястного сустава • перегрузочные, дегенеративные и воспалительные деформации • профилактика в спорте Технические характеристики <table><tr><td>Размер XS</td><td>Размер S</td><td>Размер M</td><td>Размер L</td><td>Размер XL</td></tr><tr><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td><td>Обхват запястья</td></tr><tr><td>11-13 см</td><td>13,5-15 см</td><td>15,5-17 см</td><td>17,5-19 см</td><td>19,5-21 см</td></tr></table>				Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	11-13 см	13,5-15 см	15,5-17 см	17,5-19 см	19,5-21 см		
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL																
Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья	Обхват запястья																
11-13 см	13,5-15 см	15,5-17 см	17,5-19 см	19,5-21 см																

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-01/CCA Размер XS	Д x Ш x Г (22 см, 9 см, 6.5 см). Масса 0,102 кг
AM-OSN-U-01/CCA Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 10 см, 6.5 см). Масса 0,107 кг
AM-OSN-U-01/CCA Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 11 см, 6.5 см). Масса 0,112 кг
AM-OSN-U-01/CCA Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 12 см, 6.5 см). Масса 0,117 кг
AM-OSN-U-01/CCA Размер XL	Д x Ш x Г (22 см, 13 см, 6.5 см). Масса 0,123 кг

AM-OSN-U-10	
Общее описание Ортез имеет анатомическую форму. В тыльной части установлена алюминиевая шина для защиты от выгибания кисти назад — что является самой частой причиной травмы запястья. На запястье есть прочный ремень с пряжкой, стабилизирующий его. Показания • Травма треугольного фиброзно-хрящевого комплекса (TFCC) • Воспаление запястья Технические характеристики	

Размер Универсальный Обхват запястья 13-24 см	
--	--

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-10 Размер Универсальный	Д x Ш x Г (22 см, 12 см, 5 см). Масса 0,089 кг
----------------------------------	--

AM-OSN-U-11

Общее описание

Универсальный ортез запястья AM-OSN-U-11 с опциональной иммобилизацией большого пальца является эластичным и безразмерным ортезом. Ортез очень хорошо подходит для занятий спортом. В случае надобности стабилизации большого пальца можно установить дополнительную металлическую шину, которая обездвижит седловидный сустав большого пальца. Если же нужна полная его свобода и подвижность, ортез можно использовать без шины, для стабилизации только запястья.

Показания

1. Как иммобилизации запястья (перелом, растяжение связок).
2. Бурситы (воспаления сухожилия).
3. Нестабильность лучезапястного сустава.
4. Дегенеративные и воспалительные заболевания, деформации после перегрузок.
5. Растяжение и перенапряжение локтевой коллатеральной связки сустава большого пальца (например, «Палец лыжника»).
6. Нестабильность сустава и локтевой коллатеральной связки большого пальца при ранней стадии остеоартрита
7. Вывих седловидного сустава большого пальца.
8. Тендинит мышц.
9. Профилактическое применение в спорте.

Технические характеристики

Размер Универсальный Обхват запястья 13-24 см	
--	--



Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-11 Размер Универсальный	Д x Ш x Г (17 см, 10 см, 5.5 см). Масса 0,13 кг
----------------------------------	---

AM-OSN-L-05

Общее описание

Ортез кисти AM-OSN-L-05 был изготовлен из дышащего сырья, отличающегося высоким комфортом использования. Крепежные детали изделия выполнены с использованием двух широких полиамидных вкладышей, а диапазон регулировки застежек очень велик, что позволяет легче регулировать ортез. Стоит отметить, что конструкция продукта и используемого сырья предотвращает появление синдрома запястного канала! В нижней части ортеза применяется длинная алюминиевая, анатомически контурная ложка для ладони, которая профессионально была защищена порошковой краской, что обеспечит устойчивость его к воздействию человеческого пота. В ситуации так называемой „лебединой руки” конструкция изделия со специальной застежкой корректирует положение пальцев с до локтевой стороны в нейтральное положение. Поддержание такого оптимального нейтрального положения руки позволяет тормозить процесс неврологических и дегенеративных изменений у больного. Ортез также может быть успешно использован у людей, страдающих мышечной спастикой в руке.

Изделие доступно на правую / левую руку.

Показания

- ревматоидный артрит (РА)
- неврологические изменения (спастика)
- после травм запястья и предплечья
- послеоперационное снабжение

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L
обхват запястья 13-15 см	обхват запястья 15-17 см	обхват запястья 17-19 см



Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-05 Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 12 см, 7 см). Масса 0,25 кг
AM-OSN-L-05 Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 12 см, 7 см). Масса 0,27 кг
AM-OSN-L-05 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 12 см, 7 см). Масса 0,29 кг

AM-OSN-L-06								
Общее описание Пластичный ортез предплечья и кисти с большим пальцем имеет такую конструкцию, которая позволяет легко применять его и на левую и на правую руку, благодаря чему это очень универсальный ортез. В процессе реабилитации ортез AM-OSN-L-06 позволяет постепенно стабилизировать руку от ладонной флексии до функционального положения. Большой палец может быть в среднем или приведенном положении. Предплечевая часть также пластичная, что увеличивает возможности по адаптации и стабилизации изделия. Показания - мышечная слабость в руке - спастический паралич рук - дегенеративный артрит рук и запястья Технические характеристики <table><tr><td>Размер XS Обхват запястья 11-13 см</td><td>Размер S Обхват запястья 13.5-15 см</td><td>Размер M Обхват запястья 15.5-17 см</td><td>Размер L Обхват запястья 17.5-19 см</td></tr></table>				Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13.5-15 см	Размер M Обхват запястья 15.5-17 см	Размер L Обхват запястья 17.5-19 см	
Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13.5-15 см	Размер M Обхват запястья 15.5-17 см	Размер L Обхват запястья 17.5-19 см					

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-06 Размер XS	Д x Ш x Г (37 см, 12 см, 1 см). Масса 0,238 кг
AM-OSN-L-06 Размер S	Д x Ш x Г (37 см, 14 см, 1 см). Масса 0,243 кг
AM-OSN-L-06 Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 16 см, 1 см). Масса 0,250 кг
AM-OSN-L-06 Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 18 см, 1 см). Масса 0,256 кг

AM-OSN-U-16	
Общее описание Ортез запястья AM-OSN-U-16 имеет открытую конструкцию, что облегчает его надевание и подгонку по руке. Ортез имеет алюминиевую шину, которая, стабилизирует запястье. Благодаря пластичности шины можно ее подогнуть под анатомические особенности сустава. Показания - синдром запястного канала, - после травм лучезапястного сустава, - бурсит и тендовагинит, - амилоидоз, - дегенеративные, воспалительные изменения, а также в следствие перегрузок - профилактически при работе в офисе и за компьютером	

Технические характеристики		
Размер М Обхват запястья 11-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-24 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-16 Размер М	Д x Ш x Г (16 см, 10 см, 5 см). Масса 0,096 кг
AM-OSN-U-16 Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 12 см, 5 см). Масса 0,101 кг

FIX-KG-01						
Общее описание Орtez FIX-KG-01 обеспечивает компрессию и стабилизацию лучезапястного сустава и седловидного сустава большого пальца кисти. Открытая конструкция изделия позволяет любую регулировку по окружности ортеза. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления. Показания • вывих суставов большого пальца кисти (выбитый большой палец); • растяжение большого пальца кисти; • повреждения боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника); • воспаление в области большого пальца; • повреждение сухожилий большого пальца; • переломы в области большого пальца; • ревматические изменения в большом пальце; Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-01 Размер 1	Д x Ш x Г (8 см, 7 см, 4 см). Масса 0,012 кг
---------------------------	--

FIX-KG-01 Размер 2	Д x Ш x Г (8 см, 8 см, 4 см). Масса 0,014 кг
FIX-KG-01 Размер 3	Д x Ш x Г (8 см, 9 см, 4 см). Масса 0,015 кг
FIX-KG-01 Размер 4	Д x Ш x Г (9 см, 10 см, 4 см). Масса 0,017 кг
FIX-KG-01 Размер 5	Д x Ш x Г (9 см, 11 см, 4 см). Масса 0,018 кг
FIX-KG-01 Размер 6	Д x Ш x Г (9 см, 13 см, 4 см). Масса 0,019 кг
FIX-KG-01 Размер 7	Д x Ш x Г (9 см, 14 см, 4 см). Масса 0,020 кг

FIX-KG-02						
Общее описание Ортез FIX-KG-02 обеспечивает компрессию и стабилизацию лучезапястного сустава и большого пальца кисти. Ортез позволяет свободную регулировку по обхвату, обеспечивая постоянное сжатие суставов СМС и МСР, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления. Кроме того, алюминиевая шина, размещенная с ладонной стороны сустава, обеспечивает анатомичную стабилизацию и фиксирование сустава. Показания • вывих суставов большого пальца кисти (выбитый большой палец); • растяжение большого пальца кисти; • повреждения боковых связок лястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника); • воспаление в области большого пальца; • повреждение сухожилий большого пальца; • переломы в области большого пальца; • ревматические изменения в большом пальце. Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-02 Размер 1	Д x Ш x Г (13 см, 8 см, 6 см). Масса 0,32 кг
FIX-KG-02 Размер 2	Д x Ш x Г (13 см, 8,5 см, 6 см). Масса 0,34 кг

FIX-KG-02 Размер 3	Д x Ш x Г (13 см, 9 см, 6 см). Масса 0,36 кг
FIX-KG-02 Размер 4	Д x Ш x Г (13 см, 9,5 см, 6 см). Масса 0,038 кг
FIX-KG-02 Размер 5	Д x Ш x Г (13 см, 10 см, 6 см). Масса 0,040 кг
FIX-KG-02 Размер 6	Д x Ш x Г (13 см, 10,5 см, 6 см). Масса 0,042 кг
FIX-KG-02 Размер 7	Д x Ш x Г (13 см, 11 см, 6 см). Масса 0,044 кг

FIX-KG-03						
Общее описание Ортез FIX-KG-03 обеспечивает компрессию и жесткое фиксирование большого пальца кисти. Открытая конструкция ортеза гарантирует свободное его регулирование по обхвату. Обеспечивая постоянное сжатие лучезапястного сустава, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления. Кроме того, термопластичной пластине можно придавать анатомическую форму, и она обеспечивает идеальную стабилизацию седловидного сустава большого пальца руки. Есть на правую / левую руку. Показания • вывих суставов большого пальца кисти (выбитый большой палец); • растяжение большого пальца кисти; • повреждения боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника); • воспаление в области большого пальца; • повреждение сухожилий большого пальца; • переломы в области большого пальца; • ревматические изменения в большом пальце. Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-03 Размер 1	Д x Ш x Г (11 см, 7 см, 6 см). Масса 0,047 кг
---------------------------	---

FIX-KG-03 Размер 2	Д x Ш x Г (11 см, 8 см, 6 см). Масса 0,049 кг
FIX-KG-03 Размер 3	Д x Ш x Г (12 см, 9 см, 6 см). Масса 0,051 кг
FIX-KG-03 Размер 4	Д x Ш x Г (12 см, 10 см, 6 см). Масса 0,053 кг
FIX-KG-03 Размер 5	Д x Ш x Г (12 см, 11 см, 6 см). Масса 0,054 кг
FIX-KG-03 Размер 6	Д x Ш x Г (12 см, 11.5 см, 6 см). Масса 0,055 кг
FIX-KG-03 Размер 7	Д x Ш x Г (12 см, 12 см, 6 см). Масса 0,056 кг

FIX-KG-04						
Общее описание Ортез FIX-KG-04 позволяет фиксировать большой палец кисти в положении отведения и оппозиции. Кроме того, ортез обеспечивает компрессию седловидного сустава большого пальца кисти и запястья. Показания • Вывих большого пальца • травмы боковых связок пястного сустава первого пальца (например, большого пальца лыжника) • воспаление большого пальца; • повреждение сухожилия большого пальца; • переломы большого пальца; • ревматические изменения в большом пальце. Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланго- вом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-04 Размер 1	Д x Ш x Г (7 см, 4.5 см, 2.5 см). Масса 0,009 кг
FIX-KG-04 Размер 2	Д x Ш x Г (7 см, 5 см, 2.5 см). Масса 0,010 кг
FIX-KG-04 Размер 3	Д x Ш x Г (7 см, 6 см, 2.5 см). Масса 0,011 кг
FIX-KG-04 Размер 4	Д x Ш x Г (7 см, 6.5 см, 2.5 см). Масса 0,012 кг
FIX-KG-04 Размер 5	Д x Ш x Г (7 см, 7 см, 2.5 см). Масса 0,013 кг
FIX-KG-04 Размер 6	Д x Ш x Г (7 см, 9 см, 2.5 см). Масса 0,015 кг

FIX-KG-04 Размер 7	Д x Ш x Г (7 см, 11 см, 2.5 см). Масса 0,017 кг
---------------------------	---

FIX-KG-05						
Общее описание Ортез FIX-KG-05 стабилизирует и фиксирует лучезапястный сустав и обеспечивает компрессию большого пальца кисти. Показания • переломы в области запястья и большого пальца кисти • растяжение запястья или большого пальца кисти • вывих запястья или большого пальца кисти • воспаление лучезапястного сустава и большого пальца кисти • после травмы лучезапястного сустава • изменения из-за перенапряжения • повреждение суставной сумки • повреждение треугольного фиброзно-хрящевого комплекса • переломы из-за перенапряжения • повреждения боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника) • ревматические изменения запястья и большого пальца кисти Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-05 Размер 1	Д x Ш x Г (14 см, 8 см, 4 см). Масса 0,069 кг
FIX-KG-05 Размер 2	Д x Ш x Г (16 см, 10 см, 4 см). Масса 0,073 кг
FIX-KG-05 Размер 3	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 4 см). Масса 0,078 кг
FIX-KG-05 Размер 4	Д x Ш x Г (18 см, 13 см, 4 см). Масса 0,080 кг
FIX-KG-05 Размер 5	Д x Ш x Г (18 см, 14 см, 4 см). Масса 0,082 кг

FIX-KG-05 Размер 6	Д x Ш x Г (18 см, 15 см, 4 см). Масса 0,084 кг
FIX-KG-05 Размер 7	Д x Ш x Г (18 см, 16 см, 4 см). Масса 0,086 кг

FIX-KG-06						
Общее описание Ортез FIX-KG-06 стабилизирует и фиксирует лучезапястный сустав и седловидный сустав большого пальца кисти. Термопластичная пластина ортеза позволяет контролировать движения сгибания, выпрямления и отведения запястья. Показания • переломы в области запястья и большого пальца кисти • растяжение запястья или большого пальца кисти • вывих запястья или большого пальца кисти • воспаление лучезапястного сустава и большого пальца кисти • после травмы лучезапястного сустава • изменения из-за перенапряжения • повреждение суставной сумки • повреждение треугольного фиброзно-хрящевого комплекса • переломы из-за перенапряжения • повреждения боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец • ревматические изменения запястья и большого пальца кисти						
Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфалангов ом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфалангов ом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфалангов ом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфалангово м суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфалангово м суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфалангово м суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-06 Размер 1	Д x Ш x Г (16 см, 8 см, 7 см). Масса 0,081 кг
FIX-KG-06 Размер 2	Д x Ш x Г (16 см, 9 см, 7 см). Масса 0,086 кг
FIX-KG-06 Размер 3	Д x Ш x Г (19 см, 10 см, 7 см). Масса 0,091 кг
FIX-KG-06 Размер 4	Д x Ш x Г (19 см, 11 см, 7 см). Масса 0,093 кг
FIX-KG-06 Размер 5	Д x Ш x Г (19 см, 12 см, 7 см). Масса 0,095 кг

FIX-KG-06 Размер 6	Д х Ш х Г (19 см, 13 см, 7 см). Масса 0,097 кг
FIX-KG-06 Размер 7	Д х Ш х Г (19 см, 14 см, 7 см). Масса 0,099 кг

FIX-KG-08						
Общее описание Ортез FIX-KG-08 стабилизирует и фиксирует лучезапястный сустав и обеспечивает компрессию большого пальца кисти. Открытая конструкция ортеза FIX-KG-08 гарантирует свободное его регулирование по обхвату. Обеспечивая постоянное сжатие лучезапястного сустава и седловидного сустава большого пальца кисти наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления. Кроме того, термопластичная пластина позволяет контролировать движения сгибания, выпрямления и отведения запястья. Показания • переломы в области запястья и большого пальца кисти • растяжение запястья или большого пальца кисти • вывих запястья или большого пальца кисти • воспаление лучезапястного сустава и большого пальца кисти • после травмы лучезапястного сустава • изменения из-за перенапряжения • повреждение суставной сумки • повреждение треугольного фиброзно-хрящевого комплекса • переломы из-за перенапряжения • повреждения боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника) • ревматические изменения запястья и большого пальца кисти Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-08 Размер 1	Д х Ш х Г (16 см, 8 см, 7 см). Масса 0,080 кг
FIX-KG-08 Размер 2	Д х Ш х Г (16 см, 9 см, 7 см). Масса 0,084 кг
FIX-KG-08 Размер 3	Д х Ш х Г (16 см, 10 см, 7 см). Масса 0,086 кг
FIX-KG-08 Размер 4	Д х Ш х Г (18 см, 11 см, 7 см). Масса 0,090 кг
FIX-KG-08 Размер 5	Д х Ш х Г (18 см, 12 см, 7 см). Масса 0,092 кг

FIX-KG-08 Размер 6	Д x Ш x Г (18 см, 13 см, 7 см). Масса 0,094 кг
FIX-KG-08 Размер 7	Д x Ш x Г (18 см, 14 см, 7 см). Масса 0,096 кг

FIX-KG-10			
Общее описание Ортез FIX-KG-10 обеспечивает компрессию и жесткое фиксирование большого пальца кисти и предотвращает отведение запястья. В отличие от традиционной гипсовой повязки обладает высокой пластичностью, поэтому его можно свободно нагревать и формировать, систематически изменяя углы фиксирования, в соответствии с медицинскими рекомендациями. Показания • вывих суставов большого пальца кисти (выбитый большой палец) • растяжение большого пальца кисти • травмы боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника) • воспаление в области большого пальца • повреждение сухожилий большого пальца • переломы в области большого пальца • ревматические изменения в большом пальце кисти • травма лучезапястного сустава Технические характеристики <table border="1"> <tr> <td>Размер 1 Обхват запястья 9-11 см Подходит для 1-6 лет</td><td>Размер 2 Обхват запястья 11,5-15 см Подходит для 6-12 лет</td></tr> </table>		Размер 1 Обхват запястья 9-11 см Подходит для 1-6 лет	Размер 2 Обхват запястья 11,5-15 см Подходит для 6-12 лет
Размер 1 Обхват запястья 9-11 см Подходит для 1-6 лет	Размер 2 Обхват запястья 11,5-15 см Подходит для 6-12 лет		
			

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-10 Размер 1	Д x Ш x Г (9 см, 5 см, 4 см). Масса 0,017 кг
FIX-KG-10 Размер 2	Д x Ш x Г (9 см, 8 см, 4 см). Масса 0,018 кг

4ARMY-SN-10			
Общее описание ортез AM-OSN-L-06 позволяет постепенно стабилизировать руку от ладонной флексии до функционального положения. Большой палец может быть в среднем или приведенном положении. Предплечевая часть также пластичная, что увеличивает возможности по адаптации и стабилизации изделия, без нагрева или инструментов можно придать желаемую форму и адаптировать к телу пациента. Благодаря удобству наложения и снятия изделия, стирка и хранение ортеза не предоставляют особых трудностей. Показания - мышечная слабость в руке - спастический паралич рук - дегенеративный артрит рук и запястья Технические характеристики			
Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-10 Размер XS	Д x Ш x Г (14 см, 10,5 см, 6 см). Масса 0,043 кг
4ARMY-SN-10 Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 6 см). Масса 0,046 кг
4ARMY-SN-10 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11,5 см, 6 см). Масса 0,049 кг
4ARMY-SN-10 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг

4ARMY-SN-11	
Общее описание Благодаря конструкции ортеза и материалам из которых он сделан, ортез предотвращает возникновение кистевого туннельного синдрома. Изделие снабжено фиксирующими ремнями, изготовленными из ленты VELCRO, задачей которых является оптимально подогнать шину по размеру конечности и зафиксировать его на руке. Стирка и хранение ортеза не предоставляют особых трудностей, пациент может всегда постирать изделие и соблюдать гигиену верхней конечности.	
Показания • вывихов лучезапястного сустава, • повреждения и воспаления сухожилий, • болезненных состояний запястья, • острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, • после других операций (ортопедия, ревматология), • неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, • при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки.	

Технические характеристики			
Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-11 Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 10 см, 6 см). Масса 0,042 кг
4ARMY-SN-11 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 6 см). Масса 0,047 кг
4ARMY-SN-11 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-11 Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 13 см, 6 см). Масса 0,057 кг

4ARMY-SL-11	
Общее описание Изделие оснащено лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Стабилизирует лучезапястный сустав, улучшает хватательную функцию руки, увеличивает силу зажима особенно при силовых хватках (например, теннис, тяжелая атлетика), смягчает болевые симптомы, благодаря поддержанию постоянной температуры и эластичной компрессии способствует уменьшению отеков, рассасыванию выпотов и гематом после перенесенных травм. Позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс. Технические характеристики Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-11, Размер универсальный	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
--	--

4ARMY-SL-13							
Общее описание Изделие оснащено анатомически профилированной шиной фиксирующей запястье, а также лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Указания по применению, настройка шины и период использования зависят от решения лечащего врача. Показания • во время использования ортеза в качестве обездвиживающей повязки (круглосуточно на протяжении 2-6 недель) – любые изменения установок необходимо согласовать с лечащим врачом. Не разрешается самостоятельно снимать ортез – можно лишь незначительно ослабить или сместить ленты • слишком тесное наложение ортеза может примассати к ишемии пальцев, к ослаблению и/или нарушению чувствительности целой кисти или ее части • в случае кожных изменений в местах прилегания (повреждения кожного покрова, ранения, экземы кожи), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Использование ортеза ограничено – но возможно после наложения повязки • необходимо особо контролировать правильное применение ортеза согласно рекомендациям врача — у детей, людей с нарушением памяти и психически больных. Технические характеристики <table> <tr> <td>Размер S Обхват запястья 13-15 см</td><td>Размер M Обхват запястья 15,5-17 см</td><td>Размер L Обхват запястья 17,5-19 см</td><td>Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см</td></tr> </table>				Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см				
							

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-13 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 6 см). Масса 0,108 кг
4ARMY-SL-13 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,110 кг
4ARMY-SL-13 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-13 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,114 кг

4ARMY-SL-15

Общее описание Изделие оснащено анатомически профилированной шиной фиксирующей запястье, а также лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности, иммобилизует травмированную область, снимает отечность, устраняет болевые ощущения и ускоряет реабилитацию. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава; после перенесенных переломов кости предплечья (позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам). • при хронических болевых синдромах от перегрузки и воспалительных изменений в области лучезапястного сустава • при прогрессирующих дегенеративных изменениях лучезапястного сустава и запястья вследствие посттравматических, перегрузочных и воспалительных изменений – значительно улучшает функцию руки и позволяет выполнять повседневные дела дома и на работе • при парезе верхней конечности – стабилизация запястья в функциональном положении, повышает трудоспособность руки. Технические характеристики <table><tr><td>Размер S Обхват запястья 13-15 см</td><td>Размер M Обхват запястья 15,5-17 см</td><td>Размер L Обхват запястья 17,5-19 см</td><td>Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см</td></tr></table>				Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см					

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-15 Размер S	Д х Ш х Г (25 см, 11 см, 6 см). Масса 0,107 кг
4ARMY-SL-15 Размер M	Д х Ш х Г (25 см, 13 см, 6 см). Масса 0,109 кг
4ARMY-SL-15 Размер L	Д х Ш х Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-15 Размер XL	Д х Ш х Г (25 см, 17 см, 6 см). Масса 0,115 кг

4ARMY-B-02	
Общее описание 4ARMY-B-02 – это афферентное ортопедическое средство для фиксации лучезапястного сустава – стабилизирующий ортез запястья. Модель изготовлена из комбинации многослойного медицинского текстиля и анатомически профилированных жестких элементов. Изделие оснащено анатомически профилированной шиной фиксирующей запястье, а также лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к	

конечности.

Показания

- после перенесенных травм лучезапястного сустава; после перенесенных переломов кости предплечья (позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам).
- при хронических болевых синдромах от перегрузки и воспалительных изменений в области лучезапястного сустава
- при прогрессирующих дегенеративных изменениях лучезапястного сустава и запястья вследствие посттравматических, перегрузочных и воспалительных изменений – значительно улучшает функцию руки и позволяет выполнять повседневные дела дома и на работе
- при парезе верхней конечности – стабилизация запястья в функциональном положении, повышает трудоспособность руки

Технические характеристики

Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см
--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-02 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 5 см). Масса 0,275 кг
4ARMY-B-02 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 22 см, 5 см). Масса 0,280 кг
4ARMY-B-02 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-02 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 24 см, 5 см). Масса 0,287 кг

4ARMY-B-10

Общее описание

Это изделие оснащено пластичной ортопедической шиной, выполненной из алюминия, с разной степенью упругости, соединенной с несущими прутами. Вся конструкция покрыта специальной комфортной пенкой. Застегивание при помощи системы 2х широких повязок, обхватывающих предплечье, одной широкой повязки на запястье, двух узких ремней на ладонь и одного — на большой палец. Очень широкие возможности регулировки застегивания, а, следовательно, изделие хорошо приспосабливается к руке и надежно фиксирует. Имеется мягкий сепаратор пальцев, который редуцирует болевые ощущения, защищает от натирания и удерживает



пальцы в правильном положении. Сверху ладонь фиксируется мягкой повязкой, прижимающей пальцы к стабилизатору. Показания • вывихов лучезапястного сустава, • повреждения и воспаления сухожилий, • болезненных состояний запястья, • острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, • после других операций (ортопедия, ревматология), • неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, • при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки. Технические характеристики <table border="1"> <tr> <td>Размер S Обхват запястья 13-15 см</td> <td>Размер M Обхват запястья 15-17 см</td> <td>Размер L Обхват запястья 17-19 см</td> <td>Размер XL Обхват запястья 19-21 см</td> </tr> </table>				Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см				

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-10 Размер S	Д х Ш х Г (30 см, 20 см, 5 см). Масса 0,262 кг
4ARMY-B-10 Размер M	Д х Ш х Г (32 см, 22 см, 5 см). Масса 0,276 кг
4ARMY-B-10 Размер L	Д х Ш х Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-10 Размер XL	Д х Ш х Г (32 см, 24 см, 5 см). Масса 0,295 кг

4ARMY-B-11	
Общее описание В нижней части изделия есть ладонная шина анатомической формы. В верхней части — 2 пастиковые вкладыша, которые вместе с ладонной шиной составляют 3 точки фиксации конечности. Это самый эффективный способ стабилизации запястья. Ортез крепится на руке при помощи ремней на предплечье и на кисти. Ортез имеет широкий диапазон регулировки, предотвращает возникновение кистевого туннельного синдрома. Показания • вывихов лучезапястного сустава, • повреждения и воспаления сухожилий, • болезненных состояний запястья, • острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, • после других операций (ортопедия, ревматология), • неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения,	

при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки. Технические характеристики				
Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-11 Размер XS	Д x Ш x Г (32 см, 20 см, 5 см). Масса 0,270 кг
4ARMY-B-11 Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 21 см, 5 см). Масса 0,275 кг
4ARMY-B-11 Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см). Масса 0,280 кг
4ARMY-B-11 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг

4ARMY-B-12					
Общее описание Открытый ортез запястья изготовлен в анатомической форме, благодаря чему лучше стабилизирует лучезапястный сустав и запястье, имеет регулируемую переднюю застежку, благодаря этому ортез универсальный, и легко адаптируется по форме кисти. Дополнительно в изделии есть алюминиевая боковая шина со стабилизатором, служащая для отведения большого пальца. Отведение регулируется путем выгибания шины для придания ей нужной формы. Для стабилизации большого пальца есть специальный ремень, излишек которого можно отрезать.					
Показания • после травм лучезапястного сустава • воспаления сухожилий, бурсит • дегенеративные и воспалительные деформации, и деформации от перегрузок • профилактика в спорте.					
Технические характеристики					
Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-12 Размер XS	Д x Ш x Г (32 см, 19 см, 5 см). Масса 0,270 кг
4ARMY-B-12 Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 20 см, 5 см). Масса 0,275 кг
4ARMY-B-12 Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 21 см, 5 см). Масса 0,280 кг

4ARMY-B-12 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-12 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,290 кг

4ARMY-B-14				
Общее описание Пластичный ортез предплечья и кисти с большим пальцем имеет такую конструкцию, которая позволяет легко применять его и на левую и на правую руку, благодаря чему это очень универсальный ортез. В ладонной части ортеза, по всей его длине, проходит анатомически очерченная шина ладони, влагостойкая, изготовленная из высокопрочного алюминиевого сплава. Эта шина была помещена в нейлоновый, очень прочный канал.				
Показания • мышечная слабость в руке • спастический паралич рук • дегенеративный артрит рук и запястья.				
Технические характеристики				
Размер XS Обхват запястья 11-13 см	Размер S Обхват запястья 13,5-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-14 Размер XS	Д x Ш x Г (32 см, 19 см, 5 см). Масса 0,259 кг
4ARMY-B-14 Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 20 см, 5 см). Масса 0,267 кг
4ARMY-B-14 Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см). Масса 0,276 кг
4ARMY-B-14 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг

OKG-19	
Общее описание Конструкция изделия позволяет пациенту или врачу выбрать который палец подлежит фиксации. Ортез позволяет иммобилизовать от одного до четырех пальцев. Ортез изготовлен из плотной велюрной ткани и эластичной лайкры. Имеется вырез на большой палец, имеет застежку сбоку для удобства. С тыльной стороны ортеза можно прикрепить четыре независимых шин на пальцы. Его можно не снимать на ночь. Показания • вывихов лучезапястного сустава, • повреждения и воспаления сухожилий,	

• болезненных состояний запястья, • острых или хронических воспалений запястья или пястных костей, • после других операций (ортопедия, ревматология), • неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения, • при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки • при долечивании после снятия гипсовой повязки (предплечье, кисть)			
Технические характеристики			
Размер S Обхват пясти 17-19 см	Размер M Обхват пясти 19,5-22 см	Размер L Обхват пясти 22,5-24 см	

Габаритные размеры и масса

OKG-19 Размер S	Д x Ш x Г (20 см, 14 см, 6 см). Масса 0,097 кг
OKG-19 Размер M	Д x Ш x Г (20 см, 16 см, 6 см). Масса 0,105 кг
OKG-19 Размер L	Д x Ш x Г (20 см, 17 см, 6 см). Масса 0,112 кг

AM-DON-01				
Общее описание Ортез имеет специальную пластичную вставку, которая отлично фиксирует большой палец и обеспечивает идеальную посадку. Ортез обладает отличной степенью пластичности, без необходимости дополнительного разогрева. Ортез имеет открытую конструкцию, подходит как для правой, так и для левой руки. Он слегка эластичен, обеспечивает терапевтическое сжатие сустава, улучшая абсорбцию экссудатов. Показания • большой палец игрока • большой палец смартфона • скручивание седельного сустава большого пальца • тендинит большого пальца (болезнь де Кервена) • воспаление радиально-запястного сустава.				
Технические характеристики				
Размер S Окружность большого пальца 5-6 см	Размер M Окружность большого пальца 6,5-7,5 см	Размер L Окружность большого пальца 8-9 см	Размер XL Окружность большого пальца 9,5-11 см	

Габаритные размеры и масса

AM-DON-01 Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 8 см, 3 см). Масса 0,047 кг
AM-DON-01 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 9 см, 3 см). Масса 0,049 кг
AM-DON-01 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 10 см, 3 см). Масса 0,052 кг
AM-DON-01 Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 3 см). Масса 0,055 кг

MS-N-01	
Общее описание Универсальный ортез лучезапястного сустава MS-N-01 стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Он поправляет хватательную функцию кисти, увеличивает силу зажима особенно при силовых хватках (например, теннис, тяжелая атлетика); смягчает болевые симптомы, вызванные перегрузкой, перенесенными травмами и дегенеративными изменениями. Показания • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при хронических перегрузочных и воспалительных состояниях надмыщелков плечевой кости (локоть теннисиста) – уменьшает интенсивность заболевания; • для профилактики в спорте: теннис, тяжелая атлетика, волейбол, велоспорт. Технические характеристики Размер универсальный мин 13 см - макс 20 см	

Габаритные размеры и масса

MS-N-01 Размер универсальный	Д x Ш x Г (8 см, 11 см, 3,5 см). Масса 0,035 кг
-------------------------------------	---

MS-N-02		
Общее описание Ортез оснащенный обводной лентой и липучкой для идеальной подгонки изделия к запястью. Стабилизирует лучезапястный сустав, снимает напряжение мышц предплечья и руки. Ортез запястья MS-N-02 относится к группе 4SPORT. Показания • при болевых синдромах после перенесенных травм, • при изменениях перегрузочно-воспалительных и дегенеративных, • увеличивает силу зажима руки, особенно при силовых захватах. • Особенно хорошо работает в спорте. Технические характеристики Изделие доступно на правую и левую руку		
Размер S Окружность запястья 13-15 см	Размер M Окружность запястья 15,5-17 см	Размер L Окружность запястья 17,5-19 см



Габаритные размеры и масса

MS-N-02 Размер S	Д х Ш х Г (8 см, 10 см, 3.5 см). Масса 0,028 кг
MS-N-02 Размер M	Д х Ш х Г (8 см, 10.5 см, 3.5 см). Масса 0,031 кг
MS-N-02 Размер L	Д х Ш х Г (8 см, 11 см, 3.5 см). Масса 0,035 кг

AM-SN-01	
Общее описание Стабилизатор запястья обеспечивает отличное обездвижение лучезапястного сустава. Основная задача данной модели – обездвижить сустав в анатомически правильном положении, компенсировать нагрузку и не мешать в повседневной жизни. Ортез предназначен для профилактических и лечебных целей. Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте Технические характеристики Размер универсальный Обхват запястья 13-26 см	



Габаритные размеры и масса

AM-SN-01 Размер универсальный	Д х Ш х Г (8 см, 11 см, 3,5 см). Масса 0,035 кг
--------------------------------------	---

AS-N		
Общее описание Ортез AS-N -это анатомически контурная защита запястья с открытой частью ладони для легкого захвата. Ортез не имеет элементов, проходящих через руку, что позволяет свободно использовать, например, теннисную ракетку или ловить мяч. Это изделие представляет собой закрытую модель, которая надевается как перчатка, чтобы обеспечить максимальный уровень сжатия. Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте Технические характеристики		
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	

Габаритные размеры и масса

AS-N Размер S	Д х Ш х Г (17 см, 10 см, 2,5 см). Масса 0,053 кг
AS-N Размер M	Д х Ш х Г (17 см, 11 см, 2,5 см). Масса 0,057 кг
AS-N Размер L	Д х Ш х Г (17 см, 12 см, 2,5 см). Масса 0,061 кг

AM-OSN-U-13	
Общее описание Ортез запястья AM-OSN-U-13-хороший способ предотвратить воспаление седельного сустава большого пальца. Использование ортеза в течение дня позволяет держать большой палец в терапевтическом выпрямленном и отведенном положении. Ортез также является отличным продуктом для использования во время сна, поскольку он предотвращает непроизвольное прижатие и сгибание селдьного сустава, что позволяет сухожилию расслабляться и уменьшать воспаление. Ортез не имеет алюминиевых креплений, поэтому его можно использовать при выполнении рискованных повседневных задач, т. е. работа на компьютере или строительные работы с различными типами сверл. Показания • большой палец игрока • большой палец смартфона	

• скручивание седельного сустава большого пальца • тендинит большого пальца (болезнь де Кервена) • воспаление радиально-запястного сустава • растяжение радиально-запястного сустава	
Технические характеристики Ортез АМ-ОСН-У-13 поставляется в одном универсальном размере и может применяться на обеих руках.	

Габаритные размеры и масса

АМ-ОСН-У-13 Размер универсальный	Д x Ш x Г (8 см, 13 см, 5.5 см). Масса 0,049 кг
---	---

АМ-ОСН-У-14	
Общее описание Универсальный ортез запястья АМ-ОСН-У-14 была создана для всех людей, страдающих от заболеваний запястья. Ортез изготовлен из сильно сжимающего сырья. Ортез был выполнен в открытом варианте, облегчающем его надевание и приспособление к анатомии тела пациента. Кроме того, ортез запястья имеет фиксированное кольцо для разгрузки головки и шиловидного отростка локтевой кости.	
Показания • нестабильность радиально-локтевого сустава • перелом локтевого отростка • профилактически в повседневной деятельности	
Технические характеристики Размер универсальный Окружность запястья мин 11 – макс 24 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-ОСН-У-14 Размер универсальный	Д x Ш x Г (8 см, 10 см, 4 см). Масса 0,045 кг
---	---

АМ-ОСН-У-15

Общее описание Ортез AM-OSN-U-15 оснащен анатомической вставкой для крепления запястья, и липучкой для идеальной подгонки изделия к конечности. Стабилизирует лучезапястный сустав, снимает напряжение мышцы предплечья и руки. Изделие доступно на правую и левую руку. Показания • при болевых синдромах после перенесенных травм, • при поражениях перегрузочно-воспалительных и дегенеративных, • при синдроме кистевого туннеля, • при воспалении сухожильных бурситов. • Профилактически в спорте. Технические характеристики <table><tr><td>Размер S Обхват запястья 13-15 см</td><td>Размер M Обхват запястья 15,5-17 см</td><td>Размер L Обхват запястья 17,5-19 см</td><td>Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см</td></tr></table>				Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см					

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-15 Размер S	Д x Ш x Г (13 см, 18 см, 7 см). Масса 0,021 кг
AM-OSN-U-15 Размер M	Д x Ш x Г (13 см, 19 см, 7 см). Масса 0,024 кг
AM-OSN-U-15 Размер L	Д x Ш x Г (13 см, 20 см, 7 см). Масса 0,027 кг
AM-OSN-U-15 Размер XL	Д x Ш x Г (13 см, 21 см, 7 см). Масса 0,030 кг

AM-OSN-L-07	
Общее описание Ортез лучезапястного сустава выполнен из двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента, растягивается во всех направлениях, отлично моделируя форму конечности — создаёт т. наз. вторую кожу. Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти, улучшает хватательную функцию руки, увеличивает силу зажима, смягчает болевые симптомы. Позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам. Период использования зависит от рекомендации лечащего врача. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава;	

• при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс.			
Технические характеристики			
Стандартная версия: 12 см			
Размер S Обхват пястной кости 17 — 19 см	Размер M Обхват пястной кости 19,5 — 22 см	Размер L Обхват пястной кости 22,5 — 25 см	Размер XL Обхват пястной кости 25,5 — 28 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-07 Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 12 см, 7 см). Масса 0,310 кг
AM-OSN-L-07 Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 12 см, 7 см). Масса 0,314 кг
AM-OSN-L-07 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 12 см, 7 см). Масса 0,317 кг
AM-OSN-L-07 Размер XL	Д x Ш x Г (37 см, 12 см, 7 см). Масса 0,321 кг

AM-OSN-L-08	
Общее описание Ортез лучезапястного сустава выполнен из двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента. Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает мышцы предплечья и кисти. Ортез AM-OSN-L-08 благодаря своему дизайну имеет широкий диапазон регулировки. Обводной ремень выполнен полностью из материала-липучки, что значительно облегчает индивидуальную настройку уровня стабилизации в соответствии с потребностями пациента. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс. Технические характеристики	

Удлиненная версия: 15 см			
Размер S Обхват пястной кости 17 — 19 см	Размер M Обхват пястной кости 19,5 — 22 см	Размер L Обхват пястной кости 22,5 — 25 см	Размер XL Обхват пястной кости 25,5 — 28 см

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-08 Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 15 см, 7 см). Масса 0,312 кг
AM-OSN-L-08 Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 15 см, 7 см). Масса 0,316 кг
AM-OSN-L-08 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 15 см, 7 см). Масса 0,318 кг
AM-OSN-L-08 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 15 см, 7 см). Масса 0,322 кг

AM-OSN-L-09				
Общее описание Ортез лучезапястного сустава оснащен анатомически контурной вставкой для укрепления запястья, косточками с тыльной стороны и эластичной лентой, позволяющей идеально подходит для продукта. Стабилизирует радиально-запястный сустав и запястье, разгружает мышцы предплечья и руки. Есть на левую и на правую конечность. Показания • при болевых синдромах после перенесенных травм, • при поражениях перегрузочно-воспалительных и дегенеративных, • при воспалениях • бурсит сухожилий, • при лечении переломов предплечья и запястья. Технические характеристики				
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-09 Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 10 см, 7 см). Масса 0,311 кг
AM-OSN-L-09 Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 11 см, 7 см). Масса 0,314 кг
AM-OSN-L-09 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 12 см, 7 см). Масса 0,317 кг
AM-OSN-L-09 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 13 см, 7 см). Масса 0,320 кг

AM-OSN-L-10				
Общее описание Ортез AM-OSN-L-10-это анатомический ортез запястья с периферическим ремнем. Изделие изготовлено из усиленного сырья, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью. Анатомический крой и усиленная конструкция ортеза, а также двухслойный обводной ремень обеспечивают самый высокий уровень стабилизации, что позволяет использовать стабилизатор даже в экстремальных условиях.				
Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте.				
Технические характеристики				
Размер S Обхват пястной кости 17 — 19 см	Размер M Обхват пястной кости 19,5 — 22 см	Размер L Обхват пястной кости 22,5 — 25 см	Размер XL Обхват пястной кости 25,5 — 28 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-L-10 Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 10.5 см, 7 см). Масса 0,310 кг
AM-OSN-L-10 Размер M	Д x Ш x Г (35 см, 11см, 7 см). Масса 0,313 кг
AM-OSN-L-10 Размер L	Д x Ш x Г (35 см, 12 см, 7 см). Масса 0,317 кг
AM-OSN-L-10 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 12.5 см, 7 см). Масса 0,320 кг

4ARMY-SN-01	
Общее описание Ортез 4army-SN-01-это анатомический ортез запястья с периферическим ремнем. Изделие изготовлено из усиленного сырья, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что значительно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует надлежащее сжатие защищенного сустава. Анатомический крой и усиленная конструкция ортеза, а также двухслойный периферический ремень обеспечивают самый высокий уровень стабилизации, что позволяет использовать стабилизатор даже в экстремальных условиях.	

Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте Технические характеристики Изделие доступно на правую и левую руку			
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-01 Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 10 см, 6 см). Масса 0,042 кг
4ARMY-SN-01 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 6 см). Масса 0,047 кг
4ARMY-SN-01 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-01 Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 13 см, 6 см). Масса 0,055 кг

4ARMY-SN-02			
Общее описание Орtez 4ARMY-SN-02 – это анатомический ортез запястья с периферическим ремнем. Изделие изготовлено из усиленного сырья, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что значительно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует надлежащее сжатие защищенного сустава. Анатомический крой и усиленная конструкция ортеза, а также двухслойный периферический ремень обеспечивают самый высокий уровень стабилизации.			
Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте Технические характеристики Доступно изделие на правую/левую руку.			
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-02 Размер S	Д x Ш x Г (17 см, 9 см, 2.5 см). Масса 0,045 кг
4ARMY-SN-02 Размер M	Д x Ш x Г (17 см, 10 см, 2.5 см). Масса 0,048 кг
4ARMY-SN-02 Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 11 см, 2.5 см). Масса 0,051 кг
4ARMY-SN-02 Размер XL	Д x Ш x Г (17 см, 12 см, 2.5 см). Масса 0,054 кг

AM-OSN-U-20	
Общее описание Открытая конструкция ортеза на запястье AM-OSN-U-20 позволяет предлагать его в одном универсальном размере. Он подходит и на правую и на левую руку. Конструкция гарантирует возможность точного приспособления ортеза под любой размер конечности. Показания 1. В качестве фиксатора после травмы запястья (перелом, вывих). 2. При воспалении слизистых сумок (бурсит). 3. При нестабильности лучезапястного сустава. 4. При перегрузках, дегенеративных и воспалительных изменениях. 5. Нестабильность лястно-фалангового сустава при раннем остеоартрозе 6. Вывих лучезапястного сустава 7. Надрыв мышечных сухожилий 8. Профилактически для использования в спорте. Технические характеристики Размер универсальный Обхват запястья 11-22 см	

Габаритные размеры и масса

AM-OSN-U-20 Размер универсальный	Д x Ш x Г (14 см, 9.5 см, 5 см). Масса 0,046 кг
---	---

FIX-KG-07	
Общее описание Ортез FIX-KG-07 стабилизирует и фиксирует лучезапястный сустав. Термопластичная пластина ортеза позволяет контролировать движения сгибания, выпрямления и отведения запястья. В отличие от традиционной гипсовой повязки, материал обладает высокой пластичностью, поэтому его можно свободно	

нагревать и формировать, систематически изменяя углы фиксации, в соответствии с медицинскими рекомендациями. Показания • переломы в области запястья • растяжение запястья • вывих запястья • воспаление лучезапястного сустава • после травмы лучезапястного сустава • изменения из-за перенапряжения • повреждение суставной сумки • повреждение треугольного фиброзно-хрящевого комплекса • переломы из-за перенапряжения • ревматические изменения запястья						
Технические характеристики						
Размер 1 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3-3,5 см Подходит для < 1 года	Размер 2 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 3,6-4 см Подходит для 1-2 года	Размер 3 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,1-4,5 см Подходит для 2-5 года	Размер 4 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 4,6-5 см Подходит для 4-7 лет	Размер 5 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,1-5,5 см Подходит для 7-9 лет	Размер 6 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 5,6-6 см Подходит для 8-9 лет	Размер 7 Обхват в межфаланговом суставе большого пальца 6,1-6,5 см Подходит для 9+ лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-07 Размер 1	Д х Ш х Г (16 см, 4 см, 7 см). Масса 0,066 кг
FIX-KG-07 Размер 2	Д х Ш х Г (16 см, 5 см, 7 см). Масса 0,070 кг
FIX-KG-07 Размер 3	Д х Ш х Г (16 см, 6 см, 7 см). Масса 0,074 кг
FIX-KG-07 Размер 4	Д х Ш х Г (16 см, 7 см, 7 см). Масса 0,078 кг
FIX-KG-07 Размер 5	Д х Ш х Г (16 см, 8 см, 7 см). Масса 0,082 кг
FIX-KG-07 Размер 6	Д х Ш х Г (16 см, 9 см, 7 см). Масса 0,086 кг
FIX-KG-07 Размер 7	Д х Ш х Г (16 см, 10 см, 7 см). Масса 0,090 кг

FIX-KG-11

Общее описание Ортез FIX-KG-11 обеспечивает компрессию и фиксирование лучезапястного сустава. Ортез поддерживает температуру сустава и ускоряет процесс заживления. Показания • растяжение запястья • воспаление лучезапястного сустава • после травмы лучезапястного сустава • изменения из-за перенапряжения • повреждение суставной сумки • ревматические изменения запястья Технические характеристики			
Размер 1 Обхват в пястно-фаланговых суставах 10 — 12 см Подходит для 1 — 4 года	Размер 2 Обхват в пястно-фаланговых суставах 12,5 – 15 см Подходит для 3-9 лет	Размер 3 Обхват в пястно-фаланговых суставах 12,5 – 15 см Подходит для 9 + лет	

Габаритные размеры и масса


FIX-KG-11 Размер 1	Д x Ш x Г (10 см, 5 см, 5 см). Масса 0,019 кг
FIX-KG-11 Размер 2	Д x Ш x Г (12 см, 7 см, 5 см). Масса 0,023 кг
FIX-KG-11 Размер 3	Д x Ш x Г (12 см, 9 см, 5 см). Масса 0,025 кг

FIX-KG-13	
Общее описание Ортез FIX-KG-13 обеспечивает компрессию и фиксирование лучезапястного сустава. Ортез поддерживает температуру сустава и ускоряет процесс заживления. Открытая конструкция изделия позволяет любую регулировку по окружности ортеза. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления. Ортез FIX-KG-13 это отличное решение при болевых синдромах в запястье. Показания • растяжение запястья • воспаление лучезапястного сустава • после травмы лучезапястного сустава • изменения из-за перенапряжения • повреждение суставной сумки • ревматические изменения запястья Технические характеристики	

Размер Универсальный
Обхват запястья 9 — 15 см

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-13 Размер Универсальный	Д x Ш x Г (5 см, 8 см, 3 см). Масса 0,015 кг
---------------------------------------	--

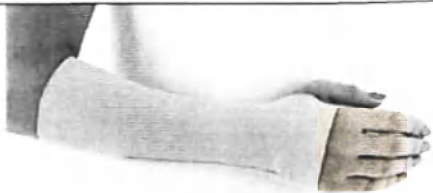OKG-17			
Общее описание Ортез OKG-17, как и кожа человека, поддерживает оптимальную температуру сустава, что положительно влияет на уменьшение болей. Кроме того, ортез обеспечивает постоянную компрессию и увеличивает проприоцепцию суставов после травм или неврологических расстройств Показания • после травм лучезапястного сустава • тендинит бурсит, • при перегрузках, дегенеративных и воспалительных изменениях • профилактически при повышенной физической активности Технические характеристики Универсальный продукт для правого и левого запястья. Общая высота изделия: 25 см			
			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват
запястья	запястья	запястья	запястья
13-15 см	15,5-17 см	17,5-19 см	19,5-22 см

Габаритные размеры и масса

OKG-17 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 9 см, 0,5 см). Масса 0,017 кг
OKG-17 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 10 см, 0,5 см). Масса 0,019 кг
OKG-17 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 11 см, 0,5 см). Масса 0,020 кг
OKG-17 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 12 см, 0,5 см). Масса 0,021 кг

4ARMY-SL-12

Общее описание

Ортез лучезапястного сустава оснащен анатомически профилированной шиной фиксирующей запястье, а также лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти.

Показания

- после перенесенных травм лучезапястного сустава; после перенесенных переломов кости предплечья (позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам).
- при хронических болевых синдромах от перегрузки и воспалительных изменений в области лучезапястного сустава
- при прогрессирующих дегенеративных изменениях лучезапястного сустава и запястья вследствие посттравматических, перегрузочных и воспалительных изменений – значительно улучшает функцию руки и позволяет выполнять повседневные дела дома и на работе
- при парезе верхней конечности – стабилизация запястья в функциональном положении, повышает трудоспособность руки.

Технические характеристики

Есть на левую и на правую конечность.



Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см
--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-12 Размер S	Д х Ш х Г (25 см, 13 см, 6 см). Масса 0,106 кг
4ARMY-SL-12 Размер M	Д х Ш х Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,109 кг
4ARMY-SL-12 Размер L	Д х Ш х Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-12 Размер XL	Д х Ш х Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,115 кг

4ARMY-SL-14				
Общее описание Ортез верхней конечности 4ARMY-SL-14 — открытого типа и с захватом большого пальца. Изделие оснащено окружной лентой VELCRO, стягивающейся при помощи полиамидной застежки. Стабилизатор запястья обеспечивает отличное обездвижение лучезапястного сустава, стабилизирует радиально-запястный сустав и обеспечивает его сжатие. Ортез можно использовать в качестве круглосуточной иммобилизации и стабилизации запястного сустава во время многих ежедневных занятий. Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях • профилактически в спорте. Технические характеристики Есть на левую и на правую конечность.				
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15-17 см	Размер L Обхват запястья 17-19 см	Размер XL Обхват запястья 19-21 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-14 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 6 см). Масса 0,104 кг
4ARMY-SL-14 Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 14 см, 6 см). Масса 0,108 кг
4ARMY-SL-14 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-14 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,115 кг

4ARMY-B-07	
Общее описание Ортез 4ARMY-B-07-это анатомический ортез запястья с периферическим ремнем. Изделие изготовлено из усиленного сырья, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что значительно облегчает прилипание изделия к конечности и гарантирует надлежащее сжатие защищенного сустава. Показания • после перенесенных травм радиально-запястного сустава • при воспалении сухожильных бурситов, • при перегрузочных, дегенеративных и воспалительных поражениях	

• профилактически в спорте Технические характеристики				
Размер S Окружность запястья 13-15 см	Размер M Окружность запястья 15-17 см	Размер L Окружность запястья 17-19 см	Размер XL Окружность запястья 19-21 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-07 Размер S	Д x Ш x Г (32 см, 21 см, 5 см). Масса 0,281 кг
4ARMY-B-07 Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 22 см, 5 см). Масса 0,283 кг
4ARMY-B-07 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-07 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 24 см, 5 см). Масса 0,287 кг

4ARMY-B-09	
Общее описание Конструкция ортеза предусматривает специфику строения тела и обеспечивает максимальный комфорт его использования, оставляет ладонь свободной и позволяет естественно держать предметы, например, теннисную ракетку. Открытая конструкция ортеза на запястье 4ARMY-B-09 позволяет предлагать его в одном универсальном размере. Он подходит и на правую и на левую руку. Конструкция гарантирует возможность точного приспособления ортеза под любой размер конечности Показания • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при хронических перегрузочных и воспалительных состояниях надмыщелков плечевой кости (локоть теннисиста) –	

уменьшает интенсивность заболевания; • для профилактики в спорте: теннис, тяжелая атлетика, волейбол, велокросс. Технические характеристики РАЗМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Есть на левую и на правую конечность.	
---	--

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-09 Размер универсальный	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
--	---

OKG-23				
Общее описание Ортез лучезапястного сустава OKG-23 выполнен из двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента. Изделие оснащено лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности. Оптимальный подбор изделия, сокращает мышечные колебания, возникающие во время физической нагрузки. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс.				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Обхват запястья, см	Обхват запястья, см	Обхват запястья, см	Обхват запястья, см	
13-15	15-17	17-19	19-21	

Габаритные размеры и масса

OKG-23 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 38 см, 3 см). Масса 0,218 кг
OKG-23 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 41 см, 3 см). Масса 0,215 кг
OKG-23 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 44 см, 3 см). Масса 0,221 кг
OKG-23 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 45 см, 3 см). Масса 0,225 кг

ОКГ-24								
Общее описание Ортез лучезапястного сустава выполнен из двухслойной ткани, которая идеально соответствует анатомическому строению тела пациента, растягивается во всех направлениях, отлично моделируя форму конечности — создаёт т. наз. вторую кожу. Стабилизирует лучезапястный сустав, разгружает прикрепления мышц предплечья и кисти. Значительно улучшает функцию руки и позволяет выполнять повседневные дела дома и на работе. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава; после перенесенных переломов кости предплечья (позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам). • при хронических болевых синдромах от перегрузки и воспалительных изменений в области лучезапястного сустава • при прогрессирующих дегенеративных изменениях лучезапястного сустава и запястья вследствие посттравматических, перегрузочных и воспалительных изменений • при парезе верхней конечности – стабилизация запястья в функциональном положении, повышает трудоспособность руки Технические характеристики <table><tr><td>Размер S Обхват запястья 13-15 см</td><td>Размер M Обхват запястья 15,5-17 см</td><td>Размер L Обхват запястья 17,5-19 см</td><td>Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см</td></tr></table>				Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см	
Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-19 см	Размер XL Обхват запястья 19,5-21 см					

Габаритные размеры и масса

ОКГ-24 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 40 см, 3 см). Масса 0,217 кг
ОКГ-24 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 42 см, 3 см). Масса 0,219 кг
ОКГ-24 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 44 см, 3 см). Масса 0,221 кг
ОКГ-24 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 45 см, 3 см). Масса 0,224 кг

ОКГ-25	
Общее описание Ортез запястья изготовлен из двухслойной ткани, которая соответствует анатомическому строению тела пациента, растягивается во всех направлениях, отлично моделируя форму конечности — создаёт т. наз. вторую кожу. Изделие оснащено лентой VELCRO, способствующей идеальному прилеганию изделия к конечности.	

Показания - после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) - при воспалительных процессах сухожильных сумок; - при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; - при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); - для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс.				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Окружность запястья	Окружность запястья	Окружность запястья	Окружность запястья	
13-15 см	15-17 см	17-19 см	19-21 см.	

Габаритные размеры и масса

OKG-25 Размер S	Д х Ш х Г (25 см, 40 см, 3 см). Масса 0,213 кг
OKG-25 Размер M	Д х Ш х Г (26 см, 40 см, 3 см). Масса 0,216 кг
OKG-25 Размер L	Д х Ш х Г (27 см, 44 см, 3 см). Масса 0,221 кг
OKG-25 Размер XL	Д х Ш х Г (28 см, 44 см, 3 см). Масса 0,224 кг

PCO-A-08			
Общее описание Компрессионный ортез предплечья без захвата ладони PCO-A-08 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу руки восполняя сенсорный дефицит маленького пациента.			
Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта			
Технические характеристики			
Размер 1 Обхват запястья 9-11 см	Размер 2 Обхват запястья 11-13 см	Размер 3 Обхват запястья 13-15 см	

Габаритные размеры и масса

PCO-A-08 Размер 1	Д x Ш x Г (12 см, 6 см, 1 см). Масса 0,009 кг
PCO-A-08 Размер 2	Д x Ш x Г (18 см, 7 см, 1 см). Масса 0,011 кг
PCO-A-08 Размер 3	Д x Ш x Г (21 см, 7 см, 1 см). Масса 0,013 кг

OKG-20	
Общее описание Универсальный ортез запястья OKG-20 имеет съемную шину и обхватывающий ремень, подходит и для левой и для правой руки. Обхватывающий ремень и застёжки на липучках обеспечивают дополнительную стабилизацию.	
Показания • для иммобилизации при травме запястья (перелом, растяжение) • при воспалении сухожилий • нестабильность лучезапястного сустава • перегрузочные, дегенеративные и воспалительные деформации • профилактика в спорте	
Технические характеристики	
	

Размер S Обхват запястья 13-15 см	Размер M Обхват запястья 15,5-17 см	Размер L Обхват запястья 17,5-20 см	Размер XL Обхват запястья 20,5-23 см	
---	---	---	--	--


Габаритные размеры и масса

OKG-20 Размер S	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 5 см). Масса 0,80 кг
OKG-20 Размер M	Д x Ш x Г (19 см, 12 см, 5 см). Масса 0,84 кг
OKG-20 Размер L	Д x Ш x Г (20 см, 12 см, 5 см). Масса 0,88 кг
OKG-20 Размер XL	Д x Ш x Г (21 см, 12 см, 5 см). Масса 0,92 кг

AM-LX-02	
Общее описание Конструкция ортеза AM-LX-02 позволяет силиконовым подушечкам концентрировать давление на мышцах и сухожилиях, задействованных в этом спорте. Подушечки направляют давление на места крепления проксимальных разгибателей и сгибателей предплечья и кисти. Уменьшают риск перегрузки и надрыва сухожилий, а в случае травмы облегчают и ускоряют заживание. Силиконовые подушечки предназначены для микромассажа во время ношения бандажа. Полиамидная пряжка регулирует силу давления. Одна подушечка несъемная, а другую можно регулировать, точно подбирая место. После регулировки положение подушечки фиксируется путем вытягивания пластиковой блокировки, чтобы предотвратить неконтролируемое смещение. Показания • Эпикондилит — синдром «локоть теннисиста» Технические характеристики Размер универсальный Обхват 20 – 33 см	

Габаритные размеры и масса

AM-LX-02 Размер универсальный	Д x Ш x Г (21 см, 7 см, 1 см). Масса 0,036 кг
--------------------------------------	---

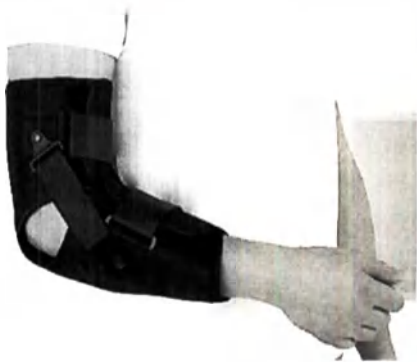AM-SL-02		
Общее описание Модель локтевого ортеза AM-SL-02 разрабатывалась с учетом всех основных характеристик, ускоряющих восстановление. В состав конструкции входит ортопедическая шина из алюминия, которая достаточно пластична, чтобы изогнуть ее под необходимым углом. При необходимости ортез можно использовать без шины. Ремни на застежке Велкро (липучке) регулируются по длине и степени натяжения, что позволяет изменять компрессию. Данная модель проста в использовании и не требует посторонней помощи при наложении/снятии. Показания • Стабилизация локтевого сустава • вывих локтя • хронические травмы локтя • Гиперэкстензия локтя • дистальная лучевая травма локтевого сустава Технические характеристики		
Размер S Обхват руки 22 – 28 см	Размер M Обхват руки 28,5 – 34 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SL-02 Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 23 см, 7 см). Масса 0,177 кг
AM-SL-02 Размер M	Д x Ш x Г (23 см, 24 см, 7 см). Масса 0,192 кг
AM-SL-02 Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 24 см, 7 см). Масса 0,2 кг

AM-LX-01	
Общее описание Ортез AM-LX-01 уменьшает боль и устраняет напряжение мышц. При каждом движении специальный компрессионный материал с силиконовыми вкладышами делает микромассаж, стимулирующий кровообращение и ускоряющий процесс заживания. Изделия можно носить в экстремальных условиях, их можно чистить и стирать вручную. Показания • «Локоть теннисиста» • «Локоть гольфиста» • Перегрузки локтевого сустава • Вывих локтевого сустава Технические характеристики	
	

Размер S Обхват в локтевом суставе 23 – 25 см	Размер M Обхват в локтевом суставе 25 – 27 см	Размер L Обхват в локтевом суставе 27 – 29 см	Размер XL Обхват в локтевом суставе 29 – 31 см	
---	---	---	--	--

Габаритные размеры и масса

AM-LX-01 Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 12 см, 2 см). Масса 0,084 кг
AM-LX-01 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 13 см, 2 см). Масса 0,088 кг
AM-LX-01 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 14 см, 2 см). Масса 0,09 кг
AM-LX-01 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 16 см, 2 см). Масса 0,093 кг

MS-L-01				
Общее описание Анатомический ортез локтя и предплечья MS-L-01 характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Поддерживает соответствующую температуру – во избежание переохлаждения или перегрева организма. Конструкция ортеза учитывает специфику телосложения и обеспечивает максимальный комфорт её использования, делает возможным неограниченную свободу движения, как и женщинам, как и мужчинам. Показания • растяжение или перегрузка локтевого сустава • ушиб локтя • перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья • вывих локтевого сустава • травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка). Технические характеристики				
Размер S Обхват руки 26,5-28 см	Размер M Обхват руки 28,5-31 см	Размер L Обхват руки 31,5-34 см	Размер XL Обхват руки 34,5-36 см	

Габаритные размеры и масса

MS-L-01 Размер S	Д x Ш x Г (8 см, 9 см, 3,5 см). Масса 0,029 кг
MS-L-01 Размер M	Д x Ш x Г (8 см, 10 см, 3,5 см). Масса 0,032 кг
MS-L-01 Размер L	Д x Ш x Г (8 см, 11 см, 3,5 см). Масса 0,035 кг
MS-L-01 Размер XL	Д x Ш x Г (8 см, 12 см, 3,5 см). Масса 0,037 кг

MS-L-02**Общее описание**

Ортез фиксирует всю верхнюю конечность, межфаланговые суставы, пястно-фаланговые суставы, запястье и локтевой сустав. Состоит из двух открытых рукавов — плеча и предплечья – способствующих легкому их наложению и точному подбору соответственно размерам окружностей верхней конечности, ортопедических шин с системой быстрой их фиксации, набора лент VELCRO. В ладонной шине имеется повязка на ладонь, фиксирующая пальцы без фиксации большого пальца. В изделии применена шина 1RE — одноосная ортопедическая шина, которая кроме широкого диапазона регулировки угла сгибания с шагом 15° отличается наличием регулировки переразгибания сустава от -15° и до -30°. Эти шины имеют боковую фиксацию сустава и очень легкие. Система ремней на липучках велкро устанавливает изделие в нужном положении.

Показания

- после внутрисуставных переломов локтя,
- посттравматических повреждений совместно запястного и локтевого суставов,
- острых воспалений запястного и локтевого суставов,
- осколочного перелома верхней конечности в период выздоровления после снятия гипсовой повязки,
- воспаления костей верхних конечностей требующего иммобилизации — в острой стадии,
- в процессе восстановления и выздоровления,
- неврологических заболеваниях центрального и периферического происхождения,
- после других операций (хирургия, ортопедия)

Технические характеристики**Размер универсальный**

Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья: мин 22 см — макс 31 см,
Окружность плеча 6 см выше середины локтя: мин 22 см — макс 44 см,
Окружность предплечья 6 см ниже середины локтя: мин 22 см — макс 36 см.

**Габаритные размеры и масса****MS-L-02 Размер универсальный**

Д х Ш х Г (48 см, 15 см, 3.5 см). Масса 0,35 кг

R4M-SL							
Общее описание Ортез локтевого сустава относится к группе ULTRA BREATHING, он был выполнен с бесшовной техникой. Применяемое сырье и способ его работы привели к получению правильной для ортопедических ортезов толщины материала и надлежащему сжатию защищенной части тела. Материал, из которого сделан ортез, растягивается там, где это необходимо, не теряя ничего из своих механических свойств. Правильно сжимая сустав, он способствует циркуляции крови и положительно влияет на функционирование и оксигенацию всего организма. Показания • при болевых синдромах локтевого сустава, вызванных перегрузкой, перенесенными травмами или дегенеративными изменениями (воспаление эпикондилита плечевой кости); • после перенесенных травм локтевого сустава (растяжений, надрывов мышц и сухожилий, при лечении перенесенных переломов) и различных заболеваний, вызывающих болевые ощущения, дисфункцию локтевого сустава; • профилактически при занятиях спортом, вызывающим значительное перенапряжение локтевого сустава (теннис, бадминтон, волейбол) Технические характеристики <table border="1"> <tr> <td>РАЗМЕР S ОБХВАТ ЛОКТЯ 23-25 см</td><td>РАЗМЕР M ОБХВАТ ЛОКТЯ 25-27 см</td><td>РАЗМЕР L ОБХВАТ ЛОКТЯ 27-29 см</td><td>РАЗМЕР XL ОБХВАТ ЛОКТЯ 29-31 см</td></tr> </table>				РАЗМЕР S ОБХВАТ ЛОКТЯ 23-25 см	РАЗМЕР M ОБХВАТ ЛОКТЯ 25-27 см	РАЗМЕР L ОБХВАТ ЛОКТЯ 27-29 см	РАЗМЕР XL ОБХВАТ ЛОКТЯ 29-31 см
РАЗМЕР S ОБХВАТ ЛОКТЯ 23-25 см	РАЗМЕР M ОБХВАТ ЛОКТЯ 25-27 см	РАЗМЕР L ОБХВАТ ЛОКТЯ 27-29 см	РАЗМЕР XL ОБХВАТ ЛОКТЯ 29-31 см				
							

Габаритные размеры и масса

R4M-SL Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 12 см, 1.5 см). Масса 0,049 кг
R4M-SL Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 13 см, 1.5 см). Масса 0,053 кг
R4M-SL Размер L	Д x Ш x Г (40 см, 14 см, 1.5 см). Масса 0,058 кг
R4M-SL Размер XL	Д x Ш x Г (40 см, 15 см, 1.5 см). Масса 0,060 кг

R4M-SL-01	
Общее описание Ортез был оснащен двумя силиконовыми пелотами. Давление силиконовых пелот направлено на проксимальные разгибатели и сгибатели мышц предплечья и руки. Это снижает риск их перегрузки или перенапряжения, а при возникновении недомоганий облегчает и ускоряет заживление. Внутренняя сторона пелоты имеет силиконовые выступы, выполняющие микромассаж при ношении, полиамидную пряжку и	

липучку для легкой регулировки прижимной силы. Внутренняя усиливающая вставка равномерно распределяет силу сжатия на предплечье. Показания • при болевых синдромах локтевого сустава, вызванных перегрузкой, перенесенными травмами или дегенеративными изменениями (воспаление эпикондилита плечевой кости); • после перенесенных травм локтевого сустава (растяжений, надрывов мышц и сухожилий, при лечении перенесенных переломов) и различных заболеваний, вызывающих болевые ощущения, дисфункцию локтевого сустава; • профилактически при занятиях спортом, вызывающим значительные перегрузки локтевого сустава (теннис, бадминтон, волейбол) Технические характеристики				
Размер S Окружность локтя 23-25 см	Размер M Окружность локтя 25-27 см	Размер L Окружность локтя 27-29 см	Размер XL Окружность локтя 29-31 см	

Габаритные размеры и масса

R4M-SL-01 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 12 см, 1.5 см). Масса 0,044 кг
R4M-SL-01 Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 13 см, 1.5 см). Масса 0,049 кг
R4M-SL-01 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 14 см, 1.5 см). Масса 0,055 кг
R4M-SL-01 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 15 см, 1.5 см). Масса 0,060 кг

AS-L	
Общее описание Ортез AS-L имеет силиконовые выступы, выполняющие микромассаж при ношении, а полиамидная IBYF и периферический ремень облегчают регулировку прижимной силы. Силиконовая Пелота оказывает давление на проксимальные связки разгибателей и сгибателей мышц предплечья и руки.	
Показания • теннисный локоть • локоть гольфиста	
Технические характеристики Размер универсальный Окружность предплечья - мин 22 – макс 30 см X-size - мин 25 – макс 38 см.	

Габаритные размеры и масса

AS-L Размер универсальный	Д х Ш х Г (7 см, 16 см, 4 см). Масса 0,047 кг
----------------------------------	--

AS-L-01						
Общее описание Идеальным решением для профилактики и лечения энтезопатии в области локтя это наш анатомический ортез на локоть теннисиста/локоть гольфиста AS-L-01.						
Показания - для профилактики в таких видах спорта как: теннис, гольф, бадминтон; - при некоторых тяжелых физических работах, связанных с вращательными движениями предплечья и руки; - при комплексных болях в области фиксации мышц предплечья; - при перегрузках локтевого сустава;						
Технические характеристики						
Размер XS Обхват руки 23,5-26 см	Размер S Обхват руки 26,5-28 см	Размер M Обхват руки 28,5-31 см	Размер L Обхват руки 31,5-34 см	Размер XL Обхват руки 34,5-36 см	Размер XXL Обхват руки 36,5-39 см	Размер XXXL Обхват руки 39,5-40 см

Габаритные размеры и масса


AS-L-01 Размер XS	Д х Ш х Г (32 см, 11 см, 3 см). Масса 0,112 кг
AS-L-01 Размер S	Д х Ш х Г (33 см, 12 см, 3 см). Масса 0,115 кг
AS-L-01 Размер M	Д х Ш х Г (34 см, 13 см, 3 см). Масса 0,118 кг
AS-L-01 Размер L	Д х Ш х Г (35 см, 14 см, 3 см). Масса 0,121 кг
AS-L-01 Размер XL	Д х Ш х Г (36 см, 15 см, 3 см). Масса 0,124 кг
AS-L-01 Размер XXL	Д х Ш х Г (37 см, 16 см, 3 см). Масса 0,127 кг
AS-L-01 Размер XXXL	Д х Ш х Г (38 см, 17 см, 3 см). Масса 0,130 кг

AS-L-02	
Общее описание Материал, из которого выполнен ортез соответственно стягивая мышцы способствует правильному кровообращению и положительно влияет на функционирование и снабжение кислородом целого организма. Ортез AS-L/A отлично стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки, обогревает, смягчает боль, улучшает кровообращение и заслоняет локоть.	
Показания Применяется: - После перенесенных травм локтевого сустава; - При острых и длительных болевых ощущениях в области группы мышц предплечья;	

- При растяжениях (теннис, гольф, бадминтон) при назначении лечащего врача — делает возможным более быстрое возобновление тренировок; - При выполнении тяжёлых физических нагрузок связанных с ротационными движениями предплечья и руки; - При выполнения тяжёлых физических упражнений вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват руки 26,5-28 см	Размер M Обхват руки 28,5-31 см	Размер L Обхват руки 31,5-34 см	Размер XL Обхват руки 34,5-36 см

Габаритные размеры и масса

AS-L-02 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 12 см, 5 см). Масса 0,077 кг
AS-L-02 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 5 см). Масса 0,081 кг
AS-L-02 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 5 см). Масса 0,085 кг
AS-L-02 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 5 см). Масса 0,089 кг

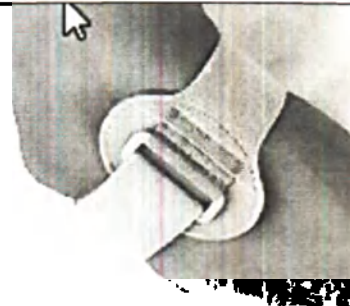AM-SL	
Общее описание Уменьшает нагрузку на крепления мышц предплечья и кисти на уровне локтевого сустава. Косвенно ортез придает силу особенно при вращательном движении предплечья Показания при комплексных болях локтевого сустава (чаще всего связанных с перенапряжением или надрывом креплений мышц) на уровне латерального и медиального надмыщелков плечевой кости – «локоть теннисиста»; - для профилактики и лечения – теннис, гольф, бадминтон, командные игры в спортивном зале; - для профилактики и лечения при тяжелых физических работах требующих вращательных движений предплечья (например, закручивание шурупов).	
Технические характеристики Размер универсальный Обхват предплечья мин 20 см - макс 33 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SL Размер универсальный	Д x Ш x Г (8 см, 13 см, 3 см). Масса 0,028 кг
-----------------------------------	---

AM-SL-01/CCA	
Общее описание Фармакологического лечения и физических методов лечения проверенная и эффективная форма терапии — это бандаж на локоть теннисиста/локоть гольфиста AM-SL-01/CCA. Бандаж наложенный в соответствующем месте разгружает сухожилие, позволяет расслабить мышцы и уменьшает боли Показания Бандаж локтевого сустава AM-SL-01/CCA имеет конструкцию с силиконовой пелотой 3D концентрирующей давление на мышцах и сухожилиях, затронутых упомянутыми заболеваниями. Уменьшается риск их перегрузки или растяжения, а в случае болей и травмы — ортез ускоряет заживание. Технические характеристики Размер Универсальный Обхват предплечья мин 20 см - макс 33 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SL-01/CCA Размер Универсальный	Д x Ш x Г (9 см, 16 см, 4 см). Масса 0,045 кг
-----------------------------------	---

AS-L/F	
Общее описание Материал, из которого изготовлен ортез, соответственно сжимая мышцы, помогает циркуляции крови и положительно влияет на функционирование и снабжение кислородом всего организма. Ортез AS-L/F превосходно стабилизирует локтевой сустав, разгружает крепления мышц предплечья и кисти, утоляет боль, улучшает кровообращение Показания - после перенесенных травм локтевого сустава; - при острых и хронических комплексных болях в области фиксации мышц предплечья; - после перенесенных спортивных травм (теннис, гольф, бадминтон) по назначению лечащего врача – это позволяет быстрее вернуться к тренировкам; - при тяжелых физических работах связанных с вращательными движениями предплечья и руки; - при тяжелых физических работах вызывающих значительную перегрузку локтевых суставов. Технические характеристики	

Размер S Обхват руки 26,5-28 см	Размер M Обхват руки 28,5-31 см	Размер L Обхват руки 31,5-34 см	Размер XL Обхват руки 34,5-36 см	
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Габаритные размеры и масса

AS-L/F Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 12 см, 3 см). Масса 0,104 кг
AS-L/F Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 13 см, 3 см). Масса 0,109 кг
AS-L/F Размер L	Д x Ш x Г (29 см, 14 см, 3 см). Масса 0,114 кг
AS-L/F Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 15 см, 3 см). Масса 0,119 кг

AS-L/A				
Общее описание Стягивая мышцы способствует правильному кровообращению и положительно влияет на функционирование и снабжение кислородом целого организма. Ортез AS-L/A отлично стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки, обогревает, смягчает боль, улучшает кровообращение и заслоняет локоть Показания После перенесенных травм локтевого сустава - При острых и длительных болевых ощущениях в области предплечья - При активном спорте как подстраховка перед непосредственными травмами - После спортивных травм (теннис, гольф, бадминтон) - При выполнении тяжелой физической работы связанной с ротационными движениями предплечья и руки - При выполнении тяжелой физической работы при значительной перегрузке сустава Технические характеристики				
Размер S Обхват руки 23-24,5 см	Размер M Обхват руки 25-26,5 см	Размер L Обхват руки 27-28,5 см	Размер XL Обхват руки 29-31 см	


Габаритные размеры и масса

AS-L/A Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 13 см, 2 см). Масса 0,153 кг
AS-L/A Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 14 см, 2 см). Масса 0,168 кг
AS-L/A Размер L	Д x Ш x Г (36 см, 15 см, 2 см). Масса 0,183 кг
AS-L/A Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 16 см, 2 см). Масса 0,198 кг

АМ-TL-01	
Общее описание Тутор на локтевой сустав АМ-TL-01 имеет функцию стабилизации верхней конечности в области локтевого сустава. Изготовлен в новой, более анатомической форме, благодаря чему лучше стабилизирует конечность, а мягкая внутренняя часть улучшает комфорт ношения. В конструкцию модели входят две пары ортопедических шин, расположенных в передней и задней части. Двусторонняя стабилизация обеспечивает более эффективную поддержку локтя и способствует скорейшему восстановлению. Бандаж фиксируется с помощью трех ленточных ремней на застежках-липучках велкро. Простая конструкция модели позволяет ребенку самостоятельно снимать и накладывать изделие до и после гигиенических процедур. Показания • растяжение локтевого сустава • вывих локтевого сустава • переломы в области локтя • ушибы локтевого сустава • воспаление локтевого сустава • послеоперационный период локтя Технические характеристики Размер универсальный Обхват руки 10см выше локтя мин 23см-макс.36см	

Габаритные размеры и масса

АМ-TL-01 Размер универсальный	Д х Ш х Г (31 см, 28 см, 2 см). Масса 0,195 кг
-------------------------------	--

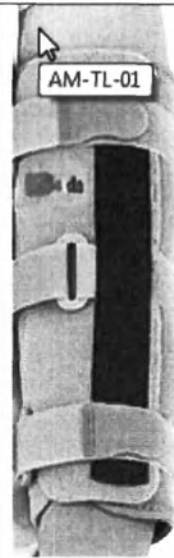АМ-TL-01(детский)	
Общее описание Детский ортез на локтевой сустав АМ-TL-01 имеет функцию стабилизации верхней конечности в области локтевого сустава. Изготовлен в новой, более анатомической форме, благодаря чему лучше стабилизирует конечность, а мягкая внутренняя часть улучшает комфорт ношения. Детский локтевой тутор Reh4Mat Am-tl-01 выпускается в одном размере с возможностью регулировки объема. Показания • растяжение локтевого сустава • вывих локтя • переломы в области локтя • ушиб локтевого сустава • воспаление локтевого сустава • послеоперационный период локтевого сустава • период после коррекции заячьей губы или неба • необходимость не дать ребенку сунуть руку в рот Технические характеристики	

Размер 1 Обхват плеча - 16-20 см Обхват локтя - 15-18 см Обхват предплечья - 14-16 см Длина шин - 18 см	
--	--

Габаритные размеры и масса

АМ-TL-01(детский) Размер 1	Д x Ш x Г (16 см, 17 см, 1 см). Масса 0,083 кг
-----------------------------------	--

U-SL	
Общее описание Поддержание соответствующей температуры – во избежание переохлаждения или перегрева организма, Комфорт ношения — ортез не имеет грубых волокон, благодаря чему сплетения не отпечатываются на коже и не оставляют следов в местах большой компрессии, Лёгкость использования — простой способ одевания и снятия изделия пациентом. Универсальность размера — ортез универсальный, нет необходимости снятия размеров, изделие модулируется под каждую окружность локтя. Конструкция ортеза учитывает специфику телосложения и обеспечивает максимальный комфорт и удобство, делает возможным неограниченную свободу движения как женщинам, как и мужчинам. Показания После перенесенных травм локтевого сустава; - При острых и длительных болевых ощущениях в области предплечья; - При активном спорте как подстраховка перед непосредственными травмами; Технические характеристики Размер универсальный Обхват руки 10см выше локтя Мин 23см – мак 35см	

Габаритные размеры и масса

U-SL Размер универсальный	Д x Ш x Г (16 см, 17 см, 1 см). Масса 0,083 кг
----------------------------------	--

ЕВ-Л

Общее описание

Стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки.

- Смягчает болевые ощущения; благодаря удержанию оптимальной температуры и эластичному стягиванию; уменьшает опухоли; облегчает впитывание кровоподтеков после перенесенных травм.

- Делает возможным более быстрое восстановление трудоспособности и возобновление тренировок. Показания к применению назначает лечащий врач.

Показания

После перенесенных травм локтевого сустава, при острых и длительных болевых ощущениях групп мышц предплечья на фоне растяжения и воспаления; Профилактически в спорте и при тяжелых физических нагрузках, связанных с ротационными движениями предплечья и руки и вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов. Исполняет защитную функцию в контактных видах спорта.

Технические характеристики

Размер S Обхват локтевом суставе	Размер M Обхват локтевом суставе	Размер L Обхват локтевом суставе	Размер XL Обхват локтевом суставе
23-25 см	25-27 см	27-29 см	29-31 см




Габаритные размеры и масса

ЕВ-Л Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 11 см, 4 см). Масса 0,133 кг
ЕВ-Л Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 12 см, 4 см). Масса 0,145 кг
ЕВ-Л Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 13 см, 4 см). Масса 0,157 кг
ЕВ-Л Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 14 см, 4 см). Масса 0,169 кг

ОКГ-04	
Общее описание Открытый ортез локтя с шиной ОКГ-04 предназначен для предотвращения синдрома кубитального канала, через позиционирование локтя в нужном положении. Ортез имеет специальные гибкие алюминиевые планшеты, которые не дают сгибать локоть. Это уменьшает давление на локтевой нерв и соответственно уменьшает болевые ощущения. Показания Синдром кубитального канала / ульнарный синдром / невропатия локтевого нерва - Растяжение / вывих локтевого сустава - Перелом локтевого сустава - Период после операции локтя - Деформации локтевого сустава - контрактуры сгибания локтя Технические характеристики Размер универсальный Обхват руки мин 22 см-макс 36см	

Габаритные размеры и масса

ОКГ-04 Размер универсальный	Д x Ш x Г (30 см, 19 см, 2 см). Масса 0,22 кг
-----------------------------	---

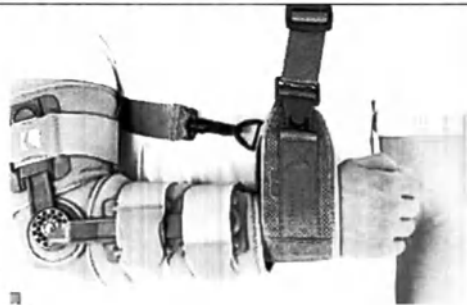АМ-KG-AR/1R	
Общее описание Редрессирующий аппарат верхней конечности состоит из: • Двух открытых рукавов — плеча и предплечья — способствующих легкому их наложению и точному подбору соответственно размерам окружностей верхней конечности. • Ортопедических шин с системой быстрой их фиксации. • Набора лент VELCRO. • Перевязи поддерживающей верхнюю конечность. Показания • После ортопедических операций и переломов • При лечении заболеваний локтевого сустава, приводящих к деформации, ограничению подвижности и снижению эластичности сухожилий. • Нестабильности локтевого сустава после травм. Технические характеристики	

Размер S Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья 17-22 см Обхват руки 6 см выше центра локтя 20-32 см Обхват предплечья 6 см ниже центра локтя 17-25 см	Размер M Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья 22,5-27 см Обхват руки 6 см выше центра локтя 20-40 см Обхват предплечья 6 см ниже центра локтя 17-37 см	Размер L Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья 27,5 см и больше Обхват руки 6 см выше центра локтя 20-40 см Обхват предплечья 6 см ниже центра локтя 17-37 см	
--	--	--	--

Габаритные размеры и масса

AM-KG-AR/1R Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 25 см, 5 см). Масса 0,286 кг
AM-KG-AR/1R Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 30 см, 5 см). Масса 0,303 кг
AM-KG-AR/1R Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 35 см, 5 см). Масса 0,320 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KG-AR/1R(детский)				
Общее описание 1. Двух открытых рукавов — плеча и предплечья — способствующих легкому их наложению и точному подбору соответственно размерам окружностей верхней конечности. 2. Ортопедических шин с системой быстрой их фиксации. 3. Набора лент VELCRO. 4. Перевязи поддерживающей верхнюю конечность. Показания Редрессирующий аппарат следует использовать в случае: - контрактуры сгибания и разгибания локтевого сустава, - неустойчивости локтя после травм, - в период выздоровления после переломов, - после других операций (ортопедия). Технические характеристики				
Размер	Длина шины А	Длина шины В	Обхват I	
1	8 см	10 см	макс. 18 см	
Размер	Длина			
2	11 см	14 см	макс. 20 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-KG-AR/1R(детский) Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 19 см, 5 см). Масса 0,261 кг
АМ-KG-AR/1R(детский) Размер 2	Д x Ш x Г (18 см, 21 см, 5 см). Масса 0,283 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

4ARMY-SL-01

Общее описание

Анатомический ортез локтевого сустава 4Army-SL-01 изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Ортез 4army-sl-01 не имеет дополнительных фиксирующих элементов, кроме собственной эластичной природы, поэтому при подборе изделия необходимо точно подбирать размер

Показания

- Ушиб, вывих или растяжение
- Для профилактики травм во время активной физической деятельности
- В других случаях по назначению врача

Технические характеристик

Размер S Обхват руки 6 см выше середины локтя 26-27см	Размер M Обхват руки 6 см выше середины локтя 27-28 см	Размер L Обхват руки 6 см выше середины локтя 28-30 см	Размер XL Обхват руки 6 см выше середины локтя 30-32 см	Размер XXL Обхват руки 6 см выше середины локтя 32-35 см
Размер S Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 26-27см	Размер M Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 27-28 см	Размер L Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 28-30 см	Размер XL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 30-32 см	Размер XXL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 32-35 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-01 Размер S	Д x Ш x Г (12 см, 11 см, 1.5 см). Масса 0,083 кг
4ARMY-SL-01 Размер M	Д x Ш x Г (12 см, 12 см, 1.5 см). Масса 0,089 кг
4ARMY-SL-01 Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 13 см, 1.5 см). Масса 0,095 кг
4ARMY-SL-01 Размер XL	Д x Ш x Г (12 см, 14 см, 1.5 см). Масса 0,101 кг
4ARMY-SL-01 Размер XXL	Д x Ш x Г (12 см, 15 см, 1.5 см). Масса 0,106 кг

4ARMY-SL-03												
Общее описание Анатомический ортез локтевого сустава 4Army-SL-03 изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Локтевой ортез был оснащен специальной силиконовой пелотой с выступами. Ее задача-разгрузить конечность при возникновении так называемого теннисного локтя или локтя гольфиста. Пелота обеспечивает микромассаж болезненными триггерными точками во время физической активности. Показания • теннисный локоть и гольфист • растяжение или перегрузка локтевого сустава • перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья • вывих локтевого сустава • травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка) Технические характеристик <table><tr><td>Размер S Обхват руки</td><td>Размер M Обхват руки</td><td>Размер L Обхват руки</td><td>Размер XL Обхват руки</td></tr><tr><td>26,5-28 см</td><td>28,5-31 см</td><td>31,5-34 см</td><td>34,5-36 см</td></tr></table>				Размер S Обхват руки	Размер M Обхват руки	Размер L Обхват руки	Размер XL Обхват руки	26,5-28 см	28,5-31 см	31,5-34 см	34,5-36 см	
Размер S Обхват руки	Размер M Обхват руки	Размер L Обхват руки	Размер XL Обхват руки									
26,5-28 см	28,5-31 см	31,5-34 см	34,5-36 см									

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-03 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 13 см, 6 см). Масса 0,101 кг
4ARMY-SL-03 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,108 кг
4ARMY-SL-03 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-03 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,116 кг

4ARMY-SL-04	
Общее описание Анатомический ортез локтевого сустава 4Army-SL-04	

изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Ортез локтя и предплечья 4Army-SL-04 обеспечивает отличное сжатие, что увеличивает циркуляцию крови. Благодаря этому мышцы во время физической активности насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышенную эффективность их работы.

Показания

- растяжение или перегрузка локтевого сустава
- перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья
- вывих локтевого сустава
- травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка)

Технические характеристики

Размер S Обхват руки 6 см выше середины локтя 24-25 см	Размер M Обхват руки 6 см выше середины локтя 25-26 см	Размер L Обхват руки 6 см выше середины локтя 26-28 см	Размер XL Обхват руки 6 см выше середины локтя 28-30 см	Размер XXL Обхват руки 6 см выше середины локтя 30-33 см
Размер S Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 26-27 см	Размер M Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 27-28 см	Размер L Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 28-30 см	Размер XL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 30-32 см	Размер XXL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 32-35 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-04 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 12 см, 6 см). Масса 0,187 кг
4ARMY-SL-04 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 13 см, 6 см). Масса 0,198 кг
4ARMY-SL-04 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 14 см, 6 см). Масса 0,205 кг
4ARMY-SL-04 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 15 см, 6 см). Масса 0,212 кг
4ARMY-SL-04 Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 16 см, 6 см). Масса 0,219 кг

4ARMY-SL-05				
Общее описание Анатомический ортез локтя и предплечья 4Army-SL-05 изготовлен из материала характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Дышащий, но прочный материал и усиленный протектор позволяют использовать ортез даже в экстремальных условиях. Показания • растяжение или перегрузка локтевого сустава • ушиб локтя • перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья • вывих локтевого сустава • травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка) Технические характеристики				
Размер S Обхват руки 6 см выше середины локтя 26-27 см	Размер M Обхват руки 6 см выше середины локтя 27-28 см	Размер L Обхват руки 6 см выше середины локтя 28-30 см	Размер XL Обхват руки 6 см выше середины локтя 30-32 см	Размер XXL Обхват руки 6 см выше середины локтя 32-35 см
Размер S Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 24-25 см	Размер M Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 25-26 см	Размер L Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 26-28 см	Размер XL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 28-30 см	Размер XXL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 30-33 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-05 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 12 см, 7 см). Масса 0,083 кг
4ARMY-SL-05 Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 13 см, 7 см). Масса 0,090 кг
4ARMY-SL-05 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 7 см). Масса 0,094 кг
4ARMY-SL-05 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 7 см). Масса 0,098 кг
4ARMY-SL-05 Размер XXL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 7 см). Масса 0,102 кг

FIX-KG-09 (детский)				
Общее описание Ортез FIX-KG-09 используется при необходимости фиксации локтевого сустава в определенном положении. Термопластичная пластина позволяет плавно регулировать положение локтя в диапазоне от выпрямления до изгиба под углом 90 градусов.				
Показания • растяжение локтевого сустава • вывих локтевого сустава • переломы в области локтя • ушибы локтевого сустава • воспаление локтевого сустава • локоть в послеоперационный период • период после коррекции заячьей губы или неба • при необходимости препятствия тому, чтобы ребенок брал руки в рот				
Технические характеристик				
Размер 1 Обхват руки 11,5 — 14 см	Размер 2 Обхват руки 11,5 — 14 см	Размер 3 Обхват руки 13 — 15,5 см	Размер 4 Обхват руки 14 — 18 см	Размер 5 Обхват руки 16,5 — 20,5 см
Размер 6 Обхват руки 18 — 22,5 см	Размер 7 Обхват руки 19 — 26,5 см	Размер 8 Обхват руки 20,5 — 27 см	Размер 9 Обхват руки 21,5 — 27 см	

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-09 (детский) Размер 1	Д х Ш х Г (16 см, 9 см, 7 см). Масса 0,107 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 2	Д х Ш х Г (16 см, 10 см, 7 см). Масса 0,113 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 3	Д х Ш х Г (18 см, 11 см, 7 см). Масса 0,120 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 4	Д х Ш х Г (18 см, 11.5 см, 7 см). Масса 0,125 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 5	Д х Ш х Г (20 см, 12 см, 7 см). Масса 0,132 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 6	Д х Ш х Г (20 см, 12.5 см, 7 см). Масса 0,136 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 7	Д х Ш х Г (20 см, 13 см, 7 см). Масса 0,140 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 8	Д х Ш х Г (20 см, 13.5 см, 7 см). Масса 0,144 кг
FIX-KG-09 (детский) Размер 9	Д х Ш х Г (20 см, 14 см, 7 см). Масса 0,148кг

FIX-KG-19(детский)

Общее описание

Одношинный ортез FIX-KG-19 является отличным вариантом фиксации локтевого сустава ребенка. Боковая, сверхлегкая алюминиевая шина обеспечивает отличную стабилизацию. Ее незначительная масса повышает комфорт пользования ортезом. Шина оснащена небольшим компактным механизмом 1R-01, который обеспечивает быстрое обслуживание изделия без каких-либо инструментов. Блокирующая заклепка вставляется и удаляется с помощью магнита. Механизм обеспечивает плотный диапазон регулировки движения локтевого сустава каждые 15 градусов. Шина обеспечивает идеальную анатомическую стабилизацию из-за соответствующего прилегания изделия к конечности.



Показания

- перелом локтевого сустава
- вывих локтевого сустава
- растяжение локтевого сустава
- контрактуры мягких тканей локтя
- нестабильность локтевого сустава
- в течение периода выздоровления и дополнительного лечения
- после операций в качестве фиксации

Технические характеристики

1	(А) Обхват плеча мин 15 – макс 22 см	Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья мин 15 — макс 18 см	Подходит для 2 — 9 лет
2	(А) Обхват плеча мин 15 – макс 25 см	Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	Подходит для 8 — 12 лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-19(детский) Размер 1	Д x Ш x Г (26 см, 10 см, 9 см). Масса 0,154 кг
FIX-KG-19(детский) Размер 2	Д x Ш x Г (30 см, 12 см, 9 см). Масса 0,193 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.


Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

ОКГ-18				
Общее описание Ортез локтя ОКГ-18 был вдохновлен природой. Мы хотели создать ортез, который, в дополнение к естественной компрессии кожи, будет обладать рядом превосходных свойств. Его толщина максимально приближена к толщине кожи человека. Это решение позволяет ортезу гармонично взаимодействовать с локтем. Мягкость и эластичность используемого материала обеспечивает мягкое, но эффективное сжатие, увеличивая проприоцепцию сустава. Ортез не шит, так что не оставляет отпечатков и не натирает кожу. Показания • после травм локтевого сустава • тендинит бурсит, • при перегрузках, дегенеративных и воспалительных изменениях • профилактически при повышенной физической активности Технические характеристики				
Размер S Обхват плеча	Размер М Обхват плеча	Размер L Обхват плеча	Размер XL Обхват плеча	
23 — 26,5 см	27 — 30,5 см	31 — 35,5 см	36 — 41 см	

Габаритные размеры и масса

ОКГ-18 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 11 см, 0.5 см). Масса 0,029 кг
ОКГ-18 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 12 см, 0.5 см). Масса 0,032 кг
ОКГ-18 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 13 см, 0.5 см). Масса 0,035 кг
ОКГ-18 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 14 см, 0.5 см). Масса 0,037 кг

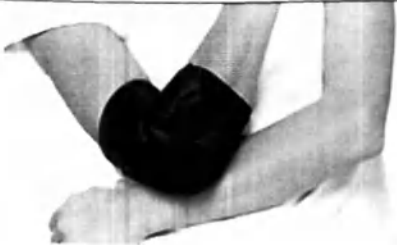ЕВ-L-02	
Общее описание Ортез локтя относится к группе 4CLASSIC — это универсальное безразмерное изделие. Ортез разгружает мышцы предплечья и на уровне локтевого сустава. Снимает болевые ощущения, поддерживая стабильную температуру, а эластичное сжатие оказывает уменьшающее отечность действие, облегчает всасывание экссудатов и гематом. Показания • после перенесенных травм (растяжений, надрывов мышц и сухожилий), • при болевых синдромах локтевого сустава.	

• Выполняет защитную функцию в контактных видах спорта.	
Технические характеристики	
Внимание! Ортез в универсальном размере!	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-L-02 Размер универсальный	Д x Ш x Г (37 см, 13 см, 4 см). Масса 0,157 кг
-------------------------------------	---

4ARMY-SN-04			
Общее описание Ортез 4ARMY-SN-04 обеспечивает превосходное сжатие, что увеличивает циркуляцию крови. Благодаря этому мышцы во время физической активности насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышенную эффективность их работы. Эти ортезы являются медицинскими изделиями I класса и, и отлично подходят для защиты суставов в суровых условиях, требующих повышенной прочности изделия. Показания • после перенесенных травм (растяжений, растяжений мышц и мышц) • при болевых синдромах локтевого сустава. • Выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Технические характеристики			
Размер M ОБХВАТ ЛОКТЯ, СМ 25-27	Размер L ОБХВАТ ЛОКТЯ, СМ 27-29	Размер XL ОБХВАТ ЛОКТЯ, СМ 29-31	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-04 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 6 см). Масса 0,049 кг
4ARMY-SN-04 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-04 Размер XL	Д x Ш x Г (14 см, 15 см, 6 см). Масса 0,055 кг

4ARMY-SN-07

Общее описание

Изделие 4ARMY-SN-07 оснащено одноосными боковыми шинами из высококачественного пластика армированного углеродными волокнами. Система шин в аппарате и особая их эластичность способствуют надлежащему прилеганию изделия к конечности, и позволяют получить превосходную фиксацию локтевого сустава. Шины снабжены шарнирами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания с шагом по 15 градусов. Такая точная регулировка изделия, несомненно, улучшает процесс восстановления поврежденного локтевого сустава.

Показания

- Редрессирующий аппарат следует использовать в случае:
- контрактуры сгибания и разгибания локтевого сустава,
- неустойчивости локтя после травм,
- в период выздоровления после переломов,
- после других операций (ортопедия).

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L
Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья 17-22 см	Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья 22,5-27 см	Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья 27,5 см и больше
Обхват Универсальный	Окружность плеча 6 см выше середины локтя мин 22 см -- макс 44 см	Окружность плеча 6 см ниже середины локтя мин 22 см – макс 36 см



Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-07 Размер S	Д х Ш х Г (34 см, 11 см, 6 см). Масса 0,214 кг
4ARMY-SN-07 Размер M	Д х Ш х Г (34 см, 11.5 см, 6 см). Масса 0,233 кг
4ARMY-SN-07 Размер L	Д х Ш х Г (34 см, 12 см, 6 см). Масса 0,252 кг

4ARMY-SN-09**Общее описание**

Ортез может ограничивать разгибание и позволяет выставлять угол сгибания локтя. Ортез имеет две угловые застёжки, постепенно блокирующие возможность разгибания руки.

В ортезе установлена алюминиевая шина, которую можно изгибать, придавая нужную форму, шина обеспечивает жесткость.

На руке и предплечье есть ремни из велкроткани, благодаря которым ортез легко подгоняется к конечности.

Показания

- Стабилизация локтя — снимает нагрузку с сухожилий предплечья и плеча.
- Усмирение боли — поддерживает стабильную температуру и эластичную компрессию, уменьшает отеки.
- Способствует рассасыванию гематом после травм.
- Позволяет быстрее вернуться к работе или тренировкам.

Технические характеристики**Размер S**

Обхват руки
мин 22 см — макс 28 см

Размер M

Обхват руки
мин 28,5 см — макс 34 см

Размер L

Обхват руки
мин 34,5 см — макс 40 см

**Габаритные размеры и масса**

4ARMY-SN-09 Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 11 см, 6 см). Масса 0,134 кг
4ARMY-SN-09 Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 11,5 см, 6 см). Масса 0,143 кг
4ARMY-SN-09 Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 12 см, 6 см). Масса 0,152 кг

4ARMY-SN-13**Общее описание**

Ортез локтя относится к группе 4SPORT, изготовлен из универсального трехслойного материала, состоящий из наружного эластичного полиамидного трикотажа с функцией самоприлипания, внутреннего слоя из неопреновой пенки и подкладки изнутри из эластичного трикотажа.

Показания

- для профилактики в таких видах спорта как: теннис, гольф, бадминтон;
- при некоторых тяжелых физических работах, связанных с вращательными движениями предплечья и руки;



• при комплексных болях в области фиксации мышц предплечья; • при перегрузках локтевого сустава	
Технические характеристики	
Размер ортеза – Универсальный, мин 13 см - макс 20 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-13 Размер универсальный	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
---	--


4ARMY-SN-14			
Общее описание Ортез локтя, относящийся к группе 4SPORT. Ортез отлично стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки, обогрывает, смягчает боль, улучшает кровообращение и заслоняет локоть. В изделии применены эластичные боковые шины. Они имеют конструкцию рессор, изготовлены из высококачественного металлопластика. Универсальный продукт для правой и левой руки. Показания • После перенесенных травм локтевого сустава. • При острых и длительных болевых ощущениях в области предплечья • При активном спорте как подстраховка перед непосредственными травмами • После спортивных травм (теннис, гольф, бадминтон) • При выполнении тяжелой физической работы, связанной с ротационными движениями предплечья и руки • При выполнении тяжелой физической работы при значительной перегрузке сустава. Технические характеристики			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват	Обхват	Обхват	Обхват



предплечья	предплечья	предплечья	предплечья	
23 — 24,5 см	25 — 26,5 см	27 — 28,5 см	29 — 31 см	

Габаритные размеры и масса


4ARMY-SN-14 Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 11 см, 6 см). Масса 0,040 кг
4ARMY-SN-14 Размер M	Д x Ш x Г (14 см, 11,5 см, 6 см). Масса 0,046 кг
4ARMY-SN-14 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-14 Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 14 см, 6 см). Масса 0,063 кг

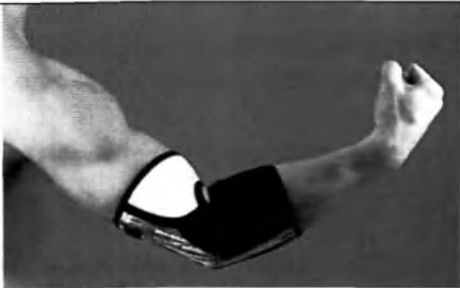4ARMY-SL-06			
Общее описание Анатомический ортез локтевого сустава 4ARMY-SL-06 изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Ортез 4Army-SL-06 обеспечивает отличное сжатие, которое увеличивает кровообращение. Благодаря этому во время физической нагрузки мышцы насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышение эффективности их работы. Показания • для профилактики в таких видах спорта как: теннис, гольф, бадминтон; • при некоторых тяжелых физических работах, связанных с вращательными движениями предплечья и руки; • при комплексных болях в области фиксации мышц предплечья; • при перегрузках локтевого сустава; Технические характеристики			
Размер M Обхват локтя, 25-27 см	Размер L Обхват локтя, 17-29 см	Размер XL Обхват локтя, 29-31 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-06 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,105 кг
-----------------------------	--

4ARMY-SL-06 Размер L	Д х Ш х Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-06 Размер XL	Д х Ш х Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,119 кг

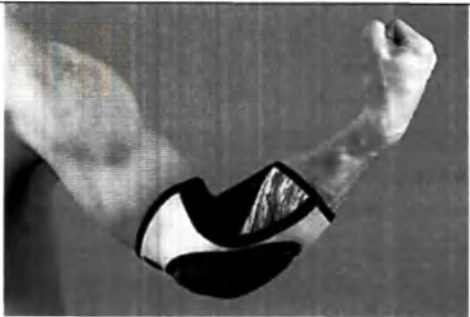4ARMY-SL-07					
Общее описание Анатомический ортез локтя поддерживает соответствующую температуру – во избежание переохлаждения или перегрева организма. Конструкция ортеза учитывает специфику телосложения и обеспечивает максимальный комфорт её использования, делает возможным неограниченную свободу движения, как и женщинам, так и мужчинам. Показания • После перенесенных травм локтевого сустава; • При острых и длительных болевых ощущениях в области группы мышц предплечья; • При растяжениях (теннис, гольф, бадминтон) при назначении лечащего врача — делает возможным более быстрое возобновление тренировок; • При выполнении тяжёлых физических нагрузок, связанных с ротационными движениями предплечья и руки; • При выполнении тяжёлых физических упражнений, вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов. Технические характеристики					
Размер S Обхват руки 6 см выше середины локтя	Размер M Обхват руки 6 см выше середины локтя	Размер L Обхват руки 6 см выше середины локтя	Размер XL Обхват руки 6 см выше середины локтя	Размер XXL Обхват руки 6 см выше середины локтя	
26-27 см	27-28 см	28-30 см	30-32 см	32-35 см	
Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	
24-25 см	25-26 см	26-28 см	28-30 см	30-33 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-07 Размер S	Д х Ш х Г (25 см, 13 см, 6 см). Масса 0,102 кг
-----------------------------	--

4ARMY-SL-07 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,107 кг
4ARMY-SL-07 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-07 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,117 кг
4ARMY-SL-07 Размер XXL	Д x Ш x Г (25 см, 17 см, 6 см). Масса 0,122 кг

4ARMY-SL-08				
Общее описание Анатомический ортез локтя и предплечья 4ARMY-SL-08 изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. В изделии применены эластичные боковые шины. Они имеют конструкцию рессор, изготовлены из высококачественного металлопластика. Благодаря своей конструкции шины гарантируют превосходную боковую стабильность сустава, имеют плавное анатомичное сгибание, так что ортез не скользит на конечности. Универсальный продукт для правой и левой руки. Показания • Перегрузка / воспаление мышц локтя и предплечья • Вывих локтевого сустава • Растяжение / перегрузка локтевого сустава • Травма UCL (локтевая коллатеральная связка) Технические характеристики				
Размер S Окружность предплечья 23 – 24,5 CM	Размер M Окружность предплечья 25 – 26,5 CM	Размер L Окружность предплечья 27 – 28,5 CM	Размер XL Окружность предплечья 29 – 31 CM	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-08 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 13 см, 6 см). Масса 0,096 кг
4ARMY-SL-08 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,104 кг
4ARMY-SL-08 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-08 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,120 кг

4ARMY-SL-09			
Общее описание Ортез снабжен эластичными боковыми косточками, стабилизирующими локтевой сустав, обводными лентами и липучками VELCRO, благодаря которым ортез легко подгоняется к конечности. Стабилизирует локтевой сустав, снимает напряжение с мышц предплечья и плеча. Показания • после перенесенных травм (растяжений, мышечных надрывов и растяжений) • при болевых синдромах локтевого сустава, вызванных перегрузкой или дегенеративными изменениями (например, „теннисный локоть”). • Профилактически это вызывает значительные перегрузки локтевого сустава. Технические характеристики			
Размер М ОБХВАТ ЛОКТЯ 25-27 см	Размер L ОБХВАТ ЛОКТЯ 27-29 см	Размер XL ОБХВАТ ЛОКТЯ 29-31 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-09 Размер М	Д x Ш x Г (25 см, 14 см, 6 см). Масса 0,107 кг
4ARMY-SL-09 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-09 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 16 см, 6 см). Масса 0,117 кг

4ARMY-B-03	
Общее описание Изделие оснащено эластичными боковыми вкладышами, отлично стабилизирующими локтевой сустав, затягивающимися лентами на липучках VELCRO которые гарантируют идеальную фиксацию конечности, застежкой-молнией, облегчающей наложение изделия. Стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки. Смягчает болевые ощущения, делает возможным более быстрое восстановление трудоспособности и возобновление тренировок. Показания • После перенесенных травм локтевого сустава,	

• при острых и длительных болевых ощущениях групп мышц предплечья на фоне растяжения и воспаления; • Профилактически в спорте и при тяжелых физических нагрузках, связанных с ротационными движениями предплечья и руки и вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов. • Исполняет защитную функцию в контактных видах спорта.			
Технические характеристики			
Размер S Обхват в локтевом суставе 23-25 см	Размер M Обхват в локтевом суставе 25-27 см	Размер L Обхват в локтевом суставе 27-29 см	Размер XL Обхват в локтевом суставе 29-31 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-03 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 21 см, 5 см). Масса 0,269 кг
4ARMY-B-03 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 22 см, 5 см). Масса 0,276 кг
4ARMY-B-03 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-03 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 24 см, 5 см). Масса 0,292 кг

ОКГ-22				
Общее описание Ортез стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки, смягчает болевые ощущения, удерживает оптимальную температуру, уменьшает опухоли, облегчает впитывание кровоподтеков после перенесенных травм. Ортез идеально сливается с телом пациента, он растягивает во всех направлениях отлично моделируя форму конечности, создает эффект «второй кожи». Показания • После перенесенных травм локтевого сустава, при острых и длительных болевых ощущениях групп мышц предплечья на фоне растяжения и воспаления; • Профилактически в спорте и при тяжелых физических нагрузках, связанных с ротационными движениями предплечья и руки и вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов. • Исполняет защитную функцию в контактных видах спорта.				
Технические характеристики				
Размер S Обхват в локтевом суставе 23-25 см	Размер M Обхват в локтевом суставе 25-27 см	Размер L Обхват в локтевом суставе 27-29 см	Размер XL Обхват в локтевом суставе 29-31 см	

Габаритные размеры и масса

OKG-22 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 40 см, 3 см). Масса 0,199 кг
OKG-22 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 42 см, 3 см). Масса 0,210 кг
OKG-22 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 44 см, 3 см). Масса 0,221 кг
OKG-22 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 46 см, 3 см). Масса 0,232 кг

AM-KG-AM/IR	
Общее описание Ортез был создан для лечения и контроля подвижности локтевого сустава, вызванного переломами или растяжениями сустава. Ортез имеет пелоты руки и предплечья из гибкого пластика, поэтому он легко адаптируется к форме каждой конечности. Рукава ортеза имеют универсальные контуры, поэтому они легко подходят для любого типа телосложения. Ортез t-Range стандартно оснащен одноточечной опорной лентой, снабженной защитой шеи и карабином, облегчающим пациенту самостоятельную установку изделия. Эта лента дополнительно имеет бесступенчатую регулировку длины, что позволяет приспособить изделие к росту каждого пациента. Шина I R orthodesign, которой был оборудован продукт, это новый подход к теме ортопедических шин с регулировкой угла изгиба и разгибания. Показания • После перелома плечевой, локтевой или лучевой костей • Послеоперационная защита локтевого сустава • Травмы сухожилий и связок • Хронические травмы локтевого сустава • После реконструкции коллатеральных связок • Гиперплазия локтевого сустава • После анастомоза сухожилий бицепса и трицепса Технические характеристики Размер универсальный Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья - мин 23 см — макс 32 см Окружность плеча 6 см выше середины локтя - мин 22 см — макс 44 см Окружность предплечья 6 см ниже середины локтя - мин 22 см — макс 36 см	

Габаритные размеры и масса

AM-KG-AM/IR Размер универсальный	Д x Ш x Г (44 см, 30 см, 17 см). Масса 0,708 кг
---	---

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

AM-KG-AM/IRE	
Общее описание Аппарат редрессирующий AM-KG-AM/IRE фиксирует всю верхнюю конечность, межфаланговые суставы, пястно-фаланговые суставы, запястье и локтевой сустав. В изделии применена шина IRE — одноосная ортопедическая шина, которая кроме широкого диапазона регулировки угла сгибания с шагом 15° отличается наличием регулировки переразгибания сустава от -15° и до -30°. Шины изготовлены из высококачественного сплава алюминия и пластика с углеродными волокнами, поэтому они легкие, не подвержены влиянию пота, одновременно жесткие, гарантирующие правильное функционирование изделия. Для точной подгонки изделия к верхней конечности, в плечевой части применены две эластичные полиэтиленовые накладки, фиксируемые ремнем «на липучках» велкро. В ладонной шине находится сепаратор пальцев. Показания • после внутрисуставных переломов локтя, • посттравматических повреждений совместно запястного и локтевого суставов, • острых воспалений запястного и локтевого суставов, • осколочного перелома верхней конечности в период выздоровления после снятия гипсовой повязки, • воспаления костей верхних конечностей требующего иммобилизации — в острой стадии, • в процессе восстановления и выздоровления, • неврологических заболеваниях центрального и периферического происхождения, • после других операций (хирургия, ортопедия) Технические характеристики Размер универсальный Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья - мин 22 см — макс 31 см Окружность плеча 6 см выше середины локтя - мин 22 см — макс 44 см Окружность предплечья 6 см ниже середины локтя - мин 22 см — макс 36 см	

Габаритные размеры и масса

AM-KG-AM/IRE Размер универсальный	Д x Ш x Г (29 см, 50 см, 8 см). Масса 0,688 кг
-----------------------------------	--

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.


Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Шаг регулировки: 15 градусов.

FIX-KG-20

Общее описание

Одношинный ортез локтя FIX-KG-20 обеспечивает регулировку диапазона движения локтевого сустава каждые 15 градусов и отличную стабилизацию. Его незначительная масса повышает комфорт пользования изделием. Шина оснащена небольшим компактным механизмом 1R-01, который обеспечивает быстрое обслуживание изделия без каких-либо инструментов. Блокирующая заклепка вставляется и удаляется с помощью магнита. Механизм обеспечивает плотный диапазон регулировки движения локтевого сустава каждые 15 градусов. Шина обеспечивает идеальную анатомическую стабилизацию из-за соответствующего прилегания изделия к конечности.

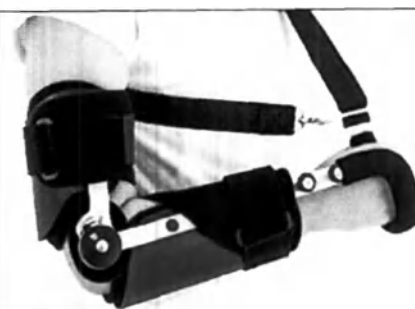

Показания

- перелом обеих костей предплечья
- перелом локтевой кости
- перелом лучевой кости
- перелом в области хрящевой пластинки роста
- перелом типа «Торус» (компрессионный)
- перелом по типу «зеленой ветки»
- перелом со смещением
- перелом Монтеджи
- перелом Галеацци

Технические характеристики

1	Обхват плеча мин 15 — макс 22 см	Длина от бокового надмышелка плечевой кости до запястья мин 15 — макс 18 см	Подходит для 2 — 9 лет
2	Обхват плеча мин 15 — макс 25 см	Длина от бокового надмышелка плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	Подходит для 8 — 12 лет

Габаритные размеры и масса

FIX-KG-20 Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 29 см, 12 см). Масса 0,305 кг
FIX-KG-20 Размер 2	Д x Ш x Г (20 см, 30 см, 12 см). Масса 0,327 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов.

4ARMY-SN-12	
Общее описание Ортез имеет пластиковые обоймы плеча и предплечья и легко приспосабливается к любой форме конечности. Кроме того, имеет мягкие рукава из велкро-ткани, которые также адаптируются по форме руки. Рукоятка покрыта мягкой оболочкой. Предназначен для лечения и контроля диапазона подвижности локтевого сустава после перелома или вывиха. Имеет перевязь с защитой шеи и карабин облегчающий самостоятельное надевание. Перевязь регулируется по длине. Ортез оборудован новаторской шиной 1R orthodesign с шагом регулировки подвижности 15°. Рукоятка защищает предплечье от нежелательной пронации и супинации. Показания • Переломы дистального отдела плечевой кости, локтя и проксимальных костей предплечья • Послеоперационная защита локтя • Травмы связок и сухожилий • Хронические травмы локтя • После реконструкции коллатеральной связки • Гиперэкстензии локтя • Анастомоз сухожилия бицепса и трицепса Технические характеристики Размер универсальный Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья - мин 23 см — макс 32 см Окружность плеча 6 см выше середины локтя - мин 22 см — макс 44 см Окружность предплечья 6 см ниже середины локтя - мин 22 см — макс 36 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-12 Размер универсальный	Д x Ш x Г (40 см, 21 см, 6 см). Масса 0,252 кг
----------------------------------	--

PCO-A-01	
Общее описание Компрессионный ортез верхней конечности с захватом большого пальца PCO-A-01 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает движения плеча, локтя и руки, дополняя сенсорный дефицит маленького пациента. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт)	

• ослабленный мышечный тонус (омт) • спастика • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта			
Технические характеристики			
Размер 1 Обхват плеча мин 13 – макс 16 см Длина от бокового надмышелка плечевой кости до запястья мин 15 — макс 18 см	Размер 2 Обхват плеча мин 17 – макс 20 см Длина от бокового надмышелка плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	Размер 3 Обхват плеча мин 21 – макс 25 см Длина от бокового надмышелка плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	

Габаритные размеры и масса

PCO-A-01 Размер 1	Д х Ш х Г (35 см, 9 см, 1 см). Масса 0,023 кг
PCO-A-01 Размер 2	Д х Ш х Г (45 см, 10 см, 1 см). Масса 0,027 кг
PCO-A-01 Размер 3	Д х Ш х Г (50 см, 11 см, 1 см). Масса 0,032 кг

PCO-A-02			
Общее описание Компрессионный ортез предплечья с захватом большого пальца PCO-A-02 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает движения предплечья и руки, дополняя сенсорный дефицит маленького пациента.			
Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта			
Технические характеристики			
Размер 1 Обхват плеча мин 13 – макс 16 см Длина от бокового надмышелка	Размер 2 Обхват плеча мин 17 – макс 20 см Длина от бокового надмышелка	Размер 3 Обхват плеча мин 21 – макс 25 см Длина от бокового надмышелка	

плечевой кости до запястья мин 15 — макс 18 см	плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	
---	---	---	--

Габаритные размеры и масса

PCO-A-02 Размер 1	Д х Ш х Г (18 см, 8 см, 1 см). Масса 0,013 кг
PCO-A-02 Размер 2	Д х Ш х Г (22 см, 9 см, 1 см). Масса 0,015 кг
PCO-A-02 Размер 3	Д х Ш х Г (25 см, 10 см, 1 см). Масса 0,017 кг

AS-PL	
Общее описание Повязка на локоть теннисиста и гольфиста AS-PL отлично снимает боль и предотвращает обострение воспаления сухожилий разгибателей и сгибателей запястья. В зависимости от места применения он снимает боковой или медиальный эпифиз, а также массирует болезненные триггерные точки мышц. Локтевая повязка AS-PL имеет широкую круговую регулировку, что позволило выполнить ее в одном универсальном размере. Изделие универсальное на правую и левую руку. Показания • теннисный локоть • локоть гольфиста Технические характеристики Размер универсальный Окружность предплечья - мин 22 – макс 30 см	

Габаритные размеры и масса

AS-PL Размер универсальный	Д х Ш х Г (6 см, 16 см, 2 см). Масса 0,04 кг
----------------------------	--

4ARMY-SL-02

Общее описание

Анатомический ортез локтя и предплечья 4Army-SL-02 изготовлен из материала, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и эластичностью, что улучшает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию сустава. Ортез локтя и предплечья 4army-SL-02 обеспечивает отличное сжатие, что увеличивает циркуляцию крови. Благодаря этому мышцы во время физической активности насыщаются кислородом, что, в свою очередь, влияет на повышенную эффективность их работы.

Показания

- растяжение или перегрузка локтевого сустава
- перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья
- вывих локтевого сустава
- травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка)

**Технические характеристики**

Размер S Обхват руки 6 см выше середины локтя 26-27см	Размер M Обхват руки 6 см выше середины локтя 27-28 см	Размер L Обхват руки 6 см выше середины локтя 28-30 см	Размер XL Обхват руки 6 см выше середины локтя 30-32 см	Размер XXL Обхват руки 6 см выше середины локтя 32-35 см
Размер S Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 24-25 см	Размер M Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 25-26 см	Размер L Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 26-28 см	Размер XL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 28-30 см	Размер XXL Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя 30-33 см


Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-02 Размер S	Д х Ш х Г (26 см, 12 см, 6 см). Масса 0,127 кг
4ARMY-SL-02 Размер M	Д х Ш х Г (26 см, 13 см, 6 см). Масса 0,130 кг
4ARMY-SL-02 Размер L	Д х Ш х Г (26 см, 14 см, 6 см). Масса 0,133 кг
4ARMY-SL-02 Размер XL	Д х Ш х Г (26 см, 15 см, 6 см). Масса 0,136 кг
4ARMY-SL-02 Размер XXL	Д х Ш х Г (26 см, 16 см, 6 см). Масса 0,139 кг

AM-OSN-U-17

Общее описание

Ортез имеет открытую конструкцию, что облегчает его надевание и подгонку по руке, имеет алюминиевую шину стабилизирующую запястье. Эластичные ремни с липучками улучшают функциональность ортеза и позволяют подогнать ортез к любому размеру руки. Универсальный эластичный ортез запястья AM-OSN-U-17 принадлежит к группе. Это универсальный трехслойный материал, состоящий из наружного эластичного полиамидного трикотажа с функцией самоприлипания, внутреннего слоя из неопреновой пенки и подкладки изнутри из эластичного трикотажа.

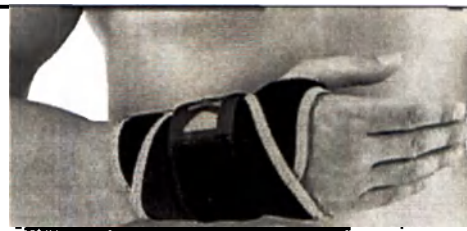**Показания**

- нестабильность в дистальном лучелоктевом суставе
- перелом шиловидного отростка локтевой кости
- повреждение фиброзного хряща треугольной формы
- профилактически в повседневной деятельности

Технические характеристики

Размер универсальный	Обхват запястья мин 11 см — макс 24 см
----------------------	---

Габаритные размеры и масса**AM-OSN-U-17 Размер универсальный****Д x Ш x Г (17 см, 9 см, 4 см). Масса 0,075 кг****ЕВ-L-01****Общее описание**

Ортез локтевого сустава, выполненный из двухслойной ткани, которая идеально сливается с телом пациента, она растягивает во всех направлениях отлично моделируя форму конечности, создает эффект «второй кожи». Стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки, смягчает болевые ощущения; благодаря удержанию оптимальной температуры и эластичному стягиванию; уменьшает опухоли; облегчает впитывание кровоподтеков после перенесенных травм, делает возможным более быстрое восстановление трудоспособности и возобновление тренировок.

Показания к применению назначает лечащий врач.

- После перенесенных травм локтевого сустава,
- при острых и длительных болевых ощущениях групп мышц предплечья на фоне растяжения и воспаления;
- Профилактически в спорте и при тяжелых физических нагрузках, связанных с ротационными движениями предплечья и руки и




вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов. • Исполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Технические характеристики				
Размер S Обхват в локтевом суставе 23-25 см	Размер M Обхват в локтевом суставе 25-27 см	Размер L Обхват в локтевом суставе 27-29 см	Размер XL Обхват в локтевом суставе 29-31 см	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-L-01 Размер S	Д x Ш x Г (36 см, 12 см, 4 см). Масса 0,141 кг
ЕВ-L-01 Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 13 см, 4 см). Масса 0,149 кг
ЕВ-L-01 Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 14 см, 4 см). Масса 0,160 кг
ЕВ-L-01 Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 15 см, 4 см). Масса 0,168 кг

4ARMY-SN-06				
Общее описание Ортез 4ARMY-SN-06-это анатомическая ортез локтя и предплечья, выполненная из усиленного сырья, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что безусловно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию, обеспеченного сустава. Очень важным преимуществом этого сырья является то, что это не вязаное изделие, оно не имеет толстых волокон, благодаря чему вязаные пряди не отпечатываются на коже пользователя и не вызывают ран в местах сильного сжатия. Показания • растяжение или перегрузка локтевого сустава • перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья • вывих локтевого сустава • травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка) Технические характеристики				
Размер S Обхват руки 6 см выше середины	Размер M Обхват руки 6 см выше середины	Размер L Обхват руки 6 см выше середины	Размер XL Обхват руки 6 см выше середины	Размер XXL Обхват руки 6 см выше

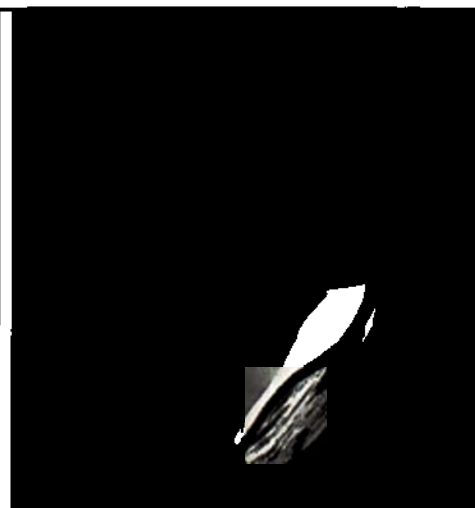

локтя	локтя	локтя	локтя	середины локтя	
26-27 см	27-28 см	28-30 см	30-32 см	32-35 см	
Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	Обхват предплечья 6 см ниже середины локтя	
24-25 см	25-26 см	26-28 см	28-30 см	30-33 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-06 Размер S	Д х Ш х Г (14 см, 10 см, 6 см). Масса 0,042 кг
4ARMY-SN-06 Размер M	Д х Ш х Г (14 см, 11 см, 6 см). Масса 0,047 кг
4ARMY-SN-06 Размер L	Д х Ш х Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-06 Размер XL	Д х Ш х Г (14 см, 13 см, 6 см). Масса 0,057 кг
4ARMY-SN-06 Размер XXL	Д х Ш х Г (14 см, 14 см, 6 см). Масса 0,062 кг

PCO-A-07(детский)		
Общее описание Компрессионный ортез верхней конечности без захвата ладони PCO-A-07 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу плеча и предплечья восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики		
Размер 1 Обхват плеча мин 13 – макс 16 см Длина от бокового надмышечка плечевой кости до запястья мин 15 — макс 18 см	Размер 2 Обхват плеча мин 17 – макс 20 см Длина от бокового надмышечка плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см	Размер 3 Обхват плеча мин 21 – макс 25 см Длина от бокового надмышечка плечевой кости до запястья мин 18,5 — макс 25 см



Габаритные размеры и масса

PCO-A-07(детский) Размер 1	Д x Ш x Г (25 см, 9 см, 1 см). Масса 0,02 кг
PCO-A-07(детский) Размер 2	Д x Ш x Г (32 см, 10 см, 1 см). Масса 0,023 кг
PCO-A-07(детский) Размер 3	Д x Ш x Г (36 см, 12 см, 1 см). Масса 0,027 кг

AM-AO-KG-01			
Общее описание Это новое изделие является эффективным средством в случае травм плечевого сустава или после операций на плечевом суставе. Аппарат отводящий верхнюю конечность с регулировкой отведения AM-AO-KG-01 с названием CLEVER 1 может применяться только по назначению врача или другого квалифицированного медицинского специалиста – например, терапевта. Как показывают новейшие научные исследования показали, в случае переднего вывиха плеча рекомендуется установка плечевого сустава в наружной ротации. Показания 1. пластика или повреждение вращающей манжеты плеча, 2. снижение риска повторного переднего вывиха плеча, 3. подбугорковый перелом плечевой кости, 4. комплекс перешейка плеча, 5. артроскопия плечевого сустава, 6. повреждение типа Bankart, 7. комплекс замороженного плеча 8. протезные имплантаты плечевого сустава, 9. послеоперационное обездвиживание плечевого сустава. Технические характеристики			
Размер S Рост пациента 150-165 см	Размер M Рост пациента 165-175 см	Размер L Рост пациента 175 см и выше	Обхват в поясе 65-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-AO-KG-01 Размер S	Д x Ш x Г (60 см, 45 см, 10 см). Масса 1.78 кг
AM-AO-KG-01 Размер M	Д x Ш x Г (65 см, 45 см, 10 см). Масса 1.89 кг
AM-AO-KG-01 Размер L	Д x Ш x Г (70 см, 45 см, 10 см). Масса 2 кг

AM-AO-KG-02

Общее описание

Ортез на отведение руки с регулированием угла отведения является эффективным иммобилайзером для лечения перелома руки, вывиха плеча или операции на вращающей манжете в послеоперационных и посттравматических условиях. Опорная подушка закрывается ремнем стабилизации окружности. Передняя опорная система состоит из вращающейся пряжки, обеспечивающей анатомическое позиционирование ортеза. Ортез рекомендуется для поддержки и частичной иммобилизации верхней конечности в случае плегии или паралича.

Показания

- послеоперационное и посттравматическое лечение плеча требует позиционирования плеча и руки под углом отведения
- пластическая хирургия
- вращающей манжеты - передняя вывих
- перелом головки плечевой кости
- травма плечевого сустава по шкале Банкарта
- после артроскопии плеча
- Протез плеча

Технические характеристики

Продукт, доступен в универсальном размере, может устанавливаться с левой и правой стороны (подходит для обеих сторон).



Габаритные размеры и масса

AM-AO-KG-02 Размер универсальный

Д x Ш x Г (18 см, 47 см, 5 см). Масса 0,390 кг

AM-SOB-04

Общее описание

Плечевой ортез AM-SOB-04 спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы его использование доставляло как можно меньше проблем пациенту, чтобы он мог самостоятельно надеть его, а легкая конструкция облегчала его ежедневное использование. Ортез устанавливает плечо и предплечье в правильное положение во время лечения дисфункции плеча. Рука может быть установлена в нейтральном или слегка прикрепленном положении. Изделие укомплектовано плечевым ремнем и подмассакой для рук. Подмассака дополнительно перфорирована, что улучшает функциональность изделия.

Показания

- Во время лечения дисфункции плеча.

Технические характеристики

Размер М Окружность груди 50 – 70 см	Размер L Окружность груди 70 – 90 см	Размер XL Окружность груди 90 – 110 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-SOB-04 Размер М	Д x Ш x Г (20 см, 42 см, 4 см). Масса 0,101 кг
АМ-SOB-04 Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 44 см, 4 см). Масса 0,108 кг
АМ-SOB-04 Размер XL	Д x Ш x Г (24 см, 46 см, 4 см). Масса 0,115 кг

АМ-BX-01									
Общее описание Послеоперационный ортез верхней конечности и плеча АМ-BX-01 предназначен для комфортной иммобилизации плечевого сустава в анатомически естественном положении. Компактная модель представляет собой: Фиксирующий рукав – основная деталь конструкции. Имеет анатомически профилированную форму и дополнительные фиксирующие ремни на застежке – липучке. Рукав захватывает плечо и ключицу, что позволяет эффективно удерживать травмированную область в правильном положении; Муфта для поддержки предплечья; Плечевой и нагрудный ремни – фиксируют ортез и регулируются по длине с помощью застежки Велкро (на липучке). Показания • вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, • острых болевых синдромов в плечевом суставе, • повреждения мягких тканей туловища, • хирургических операций плечевого сустава, • необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность • после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча. Технические характеристики <table> <tr> <td>Размер S Обхват руки 26-28 см</td><td>Размер M Обхват руки 29-31 см</td><td>Размер L Обхват руки 32-34 см</td><td>Размер XL Обхват руки 35-36 см</td><td>Размер XXL Обхват руки 37-38 см</td></tr> </table>				Размер S Обхват руки 26-28 см	Размер M Обхват руки 29-31 см	Размер L Обхват руки 32-34 см	Размер XL Обхват руки 35-36 см	Размер XXL Обхват руки 37-38 см	
Размер S Обхват руки 26-28 см	Размер M Обхват руки 29-31 см	Размер L Обхват руки 32-34 см	Размер XL Обхват руки 35-36 см	Размер XXL Обхват руки 37-38 см					

Габаритные размеры и масса

АМ-ВХ-01 Размер S	Д х Ш х Г (25 см, 35 см, 9 см). Масса 0,396 кг
АМ-ВХ-01 Размер М	Д х Ш х Г (25 см, 36 см, 9 см). Масса 0,302 кг
АМ-ВХ-01 Размер L	Д х Ш х Г (25 см, 37 см, 9 см). Масса 0,308 кг
АМ-ВХ-01 Размер XL	Д х Ш х Г (25 см, 38 см, 9 см). Масса 0,314 кг
АМ-ВХ-01 Размер XXL	Д х Ш х Г (25 см, 39 см, 9 см). Масса 0,320 кг

АМ-ВХ-02					
Общее описание Ортопедический жилет на плечо и ключицу состоит из полиуретановой пенки и подкладок из полиамида с двух сторон. Жилет можно носить на левом и на правом плече и руке. Анатомическая форма изделия и размерный ряд позволяют идеально подобрать его к телу пациента. Показания Ортопедический жилет можно использовать в случаях: - вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, - острых болевых синдромов в плечевом суставе, - повреждения мягких тканей туловища, - хирургических операций плечевого сустава, - необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность - после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча. Технические характеристики					
Размер S Обхват грудной клетки до 75 см	Размер М Обхват грудной клетки до 85 см	Размер L Обхват грудной клетки до 95 см	Размер XL Обхват грудной клетки до 105 см	Размер XXL Обхват грудной клетки до 120 см	Размер XXXL Обхват грудной клетки до 135 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ВХ-02 Размер S	Д х Ш х Г (31 см, 24 см, 8 см). Масса 0,239 кг
АМ-ВХ-02 Размер М	Д х Ш х Г (32 см, 25 см, 8 см). Масса 0,249 кг
АМ-ВХ-02 Размер L	Д х Ш х Г (33 см, 26 см, 8 см). Масса 0,259 кг
АМ-ВХ-02 Размер XL	Д х Ш х Г (33 см, 27 см, 8 см). Масса 0,267 кг


АМ-ВХ-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 28 см, 8 см). Масса 0,275 кг
АМ-ВХ-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 29 см, 8 см). Масса 0,283 кг

АМ-ВХ-03				
Общее описание Стабилизатор АМ-ВХ-03 удерживает плечевой сустав в промежуточном положении, обеспечивая лучшее управление суставом. Мышцы плеча стимулируются, и сустав восстанавливает стабильность. При необходимости дополнительная силиконовая компрессионная вставка локально массирует мягкие ткани плеча. Вставка расположена в специальном чехле, обеспечивающем дыхание кожи и удобство использования. Легко надевать и снимать ортез из-за высокой эластичности и мягкой ленты, прикрепленной в верхней части тела. Показания -после травматических повреждений -плечевого сустава -артроз -привычный вывих плеча -боль -припухлость -воспаление сустава -профилактически в спорте.				
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки
23,5-26 см	26,5-28 см	28,5-31 см	31,5-34 см	34,5-36 см



Габаритные размеры и масса

АМ-ВХ-03 Размер XS	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 3 см). Масса 0,149 кг
АМ-ВХ-03 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 15 см, 3 см). Масса 0,156 кг
АМ-ВХ-03 Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 15 см, 3 см). Масса 0,163 кг
АМ-ВХ-03 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 15 см, 3 см). Масса 0,17 кг
АМ-ВХ-03 Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 15 см, 3 см). Масса 0,177 кг

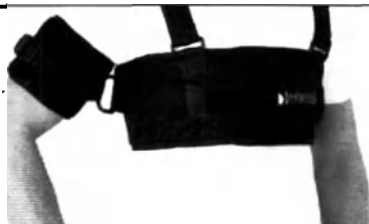MASTER-02				
Общее описание MASTER-02 это спортивный ортез плеча, предназначенный для ограничения отведения и внешней ротации плечевого сустава без утраты его функциональности. Изготовлен из дышащего материала с очень высокой прочностью. Ортез позволяет по надобности индивидуально регулировать отведение и внутреннюю ротацию. Ортез очень простой в использовании, он не мешает во время тренировок.				
Показания - повреждение вращающей манжеты плеча - перегрузка сухожилий мышц плеча - нестабильность плечевого сустава - после операции плечевого сустава (например, артроскопии плеча) Таблица размеров				
Технические характеристик				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват грудной клетки под мышками	Обхват грудной клетки под мышками	Обхват грудной клетки под мышками	Обхват грудной клетки под мышками	Обхват грудной клетки под мышками
65-75 см	75,5-85 см	85,5-100 см	100,5-115 см	115,5-130 см

Габаритные размеры и масса

MASTER-02 Размер S	Д x Ш x Г (17 см, 36 см, 5 см). Масса 0,321 кг
MASTER-02 Размер M	Д x Ш x Г (17 см, 38 см, 5 см). Масса 0,329 кг
MASTER-02 Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 40 см, 5 см). Масса 0,337 кг
MASTER-02 Размер XL	Д x Ш x Г (17 см, 42 см, 5 см). Масса 0,345 кг
MASTER-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (17 см, 46 см, 5 см). Масса 0,353 кг

ОКГ-01		
Общее описание Модель представляет собой фиксирующий корсет на область плеч с рукавами. Объем рукавов и степень компрессии регулируется с помощью застежек на липучке. Грамотная архитектура изделия с максимальным комфортом стабилизирует плечевой отдел, вследствие чего уменьшается, а со временем и совсем исчезает боль и воспаление тканей, сопровождающие заболевание.		
Показания • при лечении синдрома «замороженного плеча»		
Технические характеристики		
Размер М Обхват руки 26-31 см Ширина плеч 33- 40 см	Размер L Обхват руки 31- 36 см Ширина плеч 41-50 см	

Габаритные размеры и масса

ОКГ-01 Размер М	Д x Ш x Г (23 см, 32 см, 6 см). Масса 0,271 кг
ОКГ-01 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 34 см, 6 см). Масса 0,28 кг

ОКГ-02	
Общее описание Ортез ОКГ-02 являет собой специальную перевязь, изготовленную из приятного для кожи и прочного материала. Ортез имеет отводящую подушку до угла 30°. В комплектацию изделия входит: - Эргономичная подушка, отводящая плечо. - Муфта перевязи с автономной застежкой на кнопках и петель ремня для большого пальца, - Плечевой ремень с мягкой накладкой в области шеи. Регулировка длинны осуществляется с помощью фиксирующих элементов на липучке.	
Показания - пластичность или повреждение манжеты ротатора, - снижение риска вывиха плеча, - афферентный перелом плечевой кости, - туннельный синдром плеча, - артроскопия плеча, - синдром замороженного плеча - протезы, имплантаты плечевого сустава, - послеоперационная стабилизация плечевого сустава.	
Технические характеристик	

Размер универсальный

Габаритные размеры и масса

ОКГ-02 Размер универсальный	Д х Ш х Г (14 см, 45 см, 15 см). Масса 0,365 кг
-----------------------------	---


ОКГ-03

Общее описание

Ортез ОКГ-03 это универсальная перевязь на кисть, которую можно носить на левой и на правой руке. Ремень из двухсторонней велкротки с возможностью регулировки длины и универсального застегивания при помощи липучек велкро. На одном конце ремня есть пластиковая пряжка, на другом поворотный карабин, позволяющий быстро снять и одеть перевязь. На ремне есть мягкая защита на шею.

Ортез имеет расстегиваемую подмассажу на кисть, которая снизу имеет ортопедические планшеты.

Изделие можно носить вместе с другими ортезами верхних конечностей.

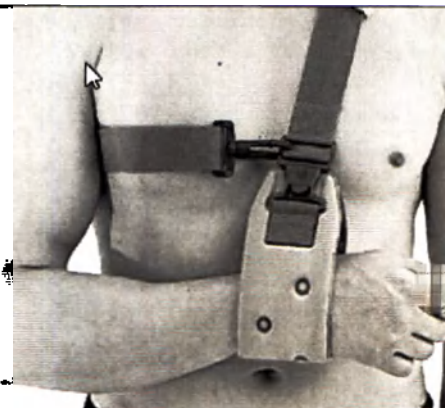

Показания

- после травм плеча, предплечья и руки
- при неврологических расстройствах
- в дополнении с другими ортезами верхних конечностей

Технические характеристик

Универсальный размер	Обхват под бюстом макс 140 см
----------------------	----------------------------------

Габаритные размеры и масса

ОКГ-03 Размер универсальный	Д х Ш х Г (25 см, 8 см, 5 см). Масса 0,103 кг
-----------------------------	---

AM-SOB						
Общее описание Ортез на плечо и локоть обездвиживает плечевой и плечелючийный суставы и лопатку. Утепляет плечо, выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Указания по применению и принципы использования ортеза определяет лечащий врач.						
Показания - при посттравматическом консервативном и хирургическом лечении повреждений плечевого, плечелючийного и локтевого суставов - при острых и хронических болевых синдромах плечевого сустава и плеча в стадии посттравматических и дегенеративных изменений, и болезненных процессов - при предрасположенности к вывихам плечевого сустава.						
Технические характеристики						
Размер XS	Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки
23,5-26 см	26,5-28 см	28,5-31 см	31,5-34 см	34,5-36 см	36,5-40 см	40,5-45 см

Габаритные размеры и масса

AM-SOB Размер XS	Д x Ш x Г (24 см, 17 см, 6 см). Масса 0,257 кг
AM-SOB Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 17 см, 6 см). Масса 0,262 кг
AM-SOB Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 17 см, 6 см). Масса 0,267 кг
AM-SOB Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 17 см, 6 см). Масса 0,272 кг
AM-SOB Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 17 см, 6 см). Масса 0,277 кг
AM-SOB Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 17 см, 6 см). Масса 0,282 кг
AM-SOB Размер XXXL	Д x Ш x Г (31 см, 17 см, 6 см). Масса 0,287 кг

AM-KOB	
Общее описание Ортопедический жилет на плечо и ключицу изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной трикотажной тканью со свойствами липучки. Анатомическая форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Жилет двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Дополнительная липучка способствует точному расположению	

охраняемой конечности строго согласно рекомендациям врача. Показания Ортопедический жилет можно использовать в случаях: - вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, - острых болевых синдромов в плечевом суставе, - повреждения мягких тканей туловища, - хирургических операций плечевого сустава, - необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность - после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча. Технические характеристик					
Размер S Обхват грудной клетки	Размер M Обхват грудной клетки	Размер L Обхват грудной клетки	Размер XL Обхват грудной клетки	Размер XXL Обхват грудной клетки	Размер XXXL Обхват грудной клетки
до 75 см	до 85 см	до 95 см	до 105 см	до 120 см	до 135 см

Габаритные размеры и масса

АМ-КОВ Размер S	Д х Ш х Г (32 см, 25 см, 8 см). Масса 0,246 кг
АМ-КОВ Размер M	Д х Ш х Г (32 см, 26 см, 8 см). Масса 0,254 кг
АМ-КОВ Размер L	Д х Ш х Г (33 см, 26 см, 8 см). Масса 0,265 кг
АМ-КОВ Размер XL	Д х Ш х Г (33 см, 27 см, 8 см). Масса 0,273 кг
АМ-КОВ Размер XXL	Д х Ш х Г (34 см, 28 см, 8 см). Масса 0,284 кг
АМ-КОВ Размер XXXL	Д х Ш х Г (34 см, 29 см, 8 см). Масса 0,292 кг

АМ-КОВ (детский)	
Общее описание Конструкция изделия выполнена в виде жилета и является универсальной – на левую и правую сторону. Жилет мягко иммобилизует плечевой и локтевой сустава. Ребенок может самостоятельно снимать и одевать жилет. Благодаря малому массе, ношение ортеза не нагружает ребенка, а лишь ограничивает движение травмированной области. Показания Ортопедический жилет можно использовать в случаях: - вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, - острых болевых синдромов в плечевом суставе, - повреждения мягких тканей туловища, - хирургических операций плечевого сустава, - необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность - после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора	

плеча		
Технические характеристики		
Размер 1 Обхват грудной клетки 50-57 см	Размер 2 Обхват грудной клетки 58-65 см	Размер 3 Обхват грудной клетки до 75 см

Габаритные размеры и масса

АМ-КОВ (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (16 см, 27 см, 7 см). Масса 0,108 кг
АМ-КОВ (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (17 см, 28 см, 7 см). Масса 0,12 кг
АМ-КОВ (детский) Размер 3	Д x Ш x Г (18 см, 29 см, 7 см). Масса 0,132 кг

AS-B						
Общее описание Ортез относится к группе 4SPORT, он изготовлен из трехслойного, объемного материала, состоящий из спандекса снаружи, середины из неопрена. Внутренний слой ортеза отвечает за поддержку нужного микроклимата около кожи и эффективный отвод пота. Этот слой не раздражает кожу, о чем свидетельствует сертификат Oeko-Tex Standard 100. Плечевой ортез As-B обладает сильным компрессионным действием, благодаря чему уменьшает выпоты, устраняет отеки, насыщает кислородом мышцы и оказывает обезболивающее действие. Защищает сустав до или после травмы плеча. Показания • нестабильность плеча • повреждение вращательного кольца • тендомиопатия в области плеча • профилактически в спорте Технические характеристики						
Размер XS Обхват руки 23,5-26 см	Размер S Обхват руки 26,5-28 см	Размер M Обхват руки 28,5-31 см	Размер L Обхват руки 31,5-34 см	Размер XL Обхват руки 34,5-36 см	Размер XXL Обхват руки 36,5-40 см	

Габаритные размеры и масса

AS-B Размер XS	Д x Ш x Г (30 см, 19см, 3 см). Масса 0,175 кг
AS-B Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 19см, 3 см). Масса 0,181 кг

AS-B Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 19см, 3 см). Масса 0,187 кг
AS-B Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 19см, 3 см). Масса 0,193 кг
AS-B Размер XL	Д x Ш x Г (34 см, 19см, 3 см). Масса 0,199 кг
AS-B Размер XXL	Д x Ш x Г (35 см, 19см, 3 см). Масса 0,205 кг

AM-AO-KG	
Общее описание Изделие имеет форму рукава с анатомическим профилем с функцией сокращения его длины. Внутри рукава можно установить регулируемую рукоятку для лучшей фиксации конечности или силиконовую подушку для упражнений ладони. Лямки ортеза изготовлены из ремней на липучках, что позволяет регулировать их длину, а также имеют мягкую подкладку. Ортез имеет также широкую алюминиевую набедренную обойму с элементом, отводящим рукав. Эта обойма имеет пластические свойства и хорошо подгоняется к телу, тем самым улучшая фиксацию при помощи этого изделия. Показания Аппарат для ротации плечевого сустава AM-AO-KG можно использовать в случае любых травм или нарушений в области плеча, требующих поддержки или обездвижения верхней конечности и в качестве послеоперационного оборудования. Технические характеристики Размер универсальный, ортез можно применять как для правой, так и левой верхней конечности.	
	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см

Габаритные размеры и масса

AM-AO-KG Размер универсальный	Д x Ш x Г (18 см, 47 см, 5 см). Масса 0,92 кг
--------------------------------------	---

4ARMY-B-01	
Общее описание Плечевой ортез 4army-B-01 имеет новый анатомический крой, а его конструкция дополнительно усилена. Ремни, которые снабжены стабилизатором, построены из двух слоев, что определенно увеличивает их прочность. Кроме того, в изделии используется трехполосная система, позволяющая регулировать диапазон движения и усиливать работу вращающего конуса. Ортез снабжен пряжкой, гарантирующей быстрое и легкое надевание и снятие изделия. Локтевой ортез 4army-B-01 обеспечивает превосходное сжатие, что увеличивает циркуляцию	

крови. Показания • болезненность плечевого сустава, • воспаление плечевого сустава, • профилактически во время физической активности Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	
Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	Обхват руки	
26-28 см	29-31 см	32-34 см	35-36 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-01 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 23 см, 5 см). Масса 0,272 кг
4ARMY-B-01 Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 23 см, 5 см). Масса 0,278 кг
4ARMY-B-01 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-01 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 24 см, 5 см). Масса 0,294 кг

FIX-KG-12		
Общее описание Ортез FIX-KG-12 обеспечивает компрессию и фиксирование плечевого сустава. Открытая конструкция изделия позволяет любую регулировку по окружности ортеза. Обеспечивая постоянное сжатие, наш ортез поддерживает температуру тела, уменьшая боль и тем самым ускоряя процесс заживления тканей.		
Показания • травмы плеча • вывих плеча • привычный вывих плечевого сустава • боль • отек • воспаление сустава • повреждение мягких тканей в области верхней конечности требующее обездвижения (ушибы, инфекции)		
Технические характеристик		
Размер 1 Обхват плеча 16 — 19 см Подходит для 1 — 4 года	Размер 2 Обхват плеча 19,5 — 23 см Подходит для 4 — 9 лет	Размер 3 Обхват плеча 23,5 — 27 см Подходит для 9 + лет

Габаритные размеры и масса


FIX-KG-12 Размер 1	Д x Ш x Г (21 см, 11 см, 4 см). Масса 0,085 кг
---------------------------	--

FIX-KG-12 Размер 2	Д х Ш х Г (22 см, 12 см, 4 см). Масса 0,088 кг
FIX-KG-12 Размер 3	Д х Ш х Г (23 см, 13 см, 4 см). Масса 0,091 кг

ТВ-02	
Общее описание Плечевой ортез ТВ-02-это сжатие и криотерапия в 1 продукте - двухкомпонентное термальное решение, гарантирующее немедленное облегчение боли. Неопреновая повязка и мешок для измельченного льда обеспечивают постоянное сжатие и криотерапию перегруженных мягких тканей плечевого сустава. На крышке мешка помещен специальный вентиляционный клапан, который обеспечивает адгезию мешка к области плеча, окутывая его низкой температурой и тем самым создавая мгновенную "холодную повязку". Показания Воспаление плечевого сустава, перегрузка вращающей манжеты плеча, после перенесенных повреждениях плечевого сустава, привычный вывих плечевого сустава, нестабильность плеча, боль, отек, повреждения повреждение вертлужной впадины типа SLAP, синдром стеснения в плечах / синдром болезненного плеча, плечо заморожено, артроз, после операций (артроскопии плеча). Технические характеристики Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

ТВ-02 Размер универсальный	Д х Ш х Г (22 см, 31 см, 5 см). Масса 0,415 кг
-----------------------------------	--

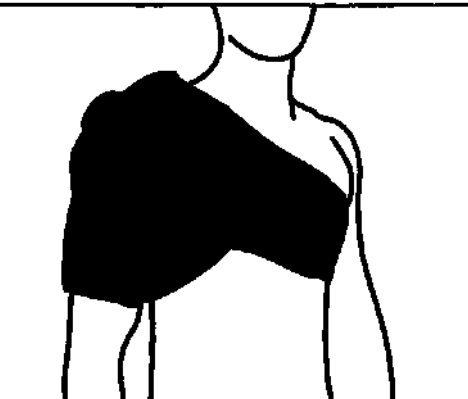ТВ-03	
Общее описание Плечевой ортез ТВ-03-это трехкомпонентное термальное решение, гарантирующее немедленное облегчение боли. Расширенная плечевая часть, изготовленная из неопрена, обеспечивает постоянное сжатие сустава. 2 отверстия позволяют использовать 2 мешка измельченного льда, охлаждающие переднюю и заднюю части плечевого сустава. На крышках мешков мы разместили специальный вентиляционный клапан, который обеспечивает отличную адгезию мешка к области плеча, окутывая его низкой температурой и тем самым создавая	

мгновенную "холодную повязку". Показания Воспаление плечевого сустава, перегрузка вращающей манжеты плеча, после перенесенных повреждениях плечевого сустава, привычный вывих плечевого сустава, нестабильность плеча, боль, отек, повреждения повреждение вертлужной впадины типа SLAP, синдром стеснения в плечах / синдром болезненного плеча, плечо заморожено, артроз, после операций (артроскопии плеча). Технические характеристики	
Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

ТВ-03 Размер универсальный	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 8 см). Масса 0,58кг
-----------------------------------	--

MASTER-04					
Общее описание Ортез предназначен для поддержки и частичной иммобилизации верхней конечности в случае в случае пареза или паралича. Ортопедический жилет на плечо и ключицу изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной трикотажной тканью со свойствами липучки. Анатомическая форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Жилет двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Дополнительная липучка способствует точному расположению охраняемой конечности строго согласно рекомендациям врача.					
Показания • вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, • острых болевых синдромов в плечевом суставе, • повреждения мягких тканей туловища, • хирургических операций плечевого сустава, • необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность • после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча.					
Технические характеристики					
Размер S Обхват грудной клетки	Размер M Обхват грудной	Размер L Обхват грудной клетки	Размер XL Обхват грудной	Размер XXL Обхват грудной	Размер XXXL Обхват грудной

до 75 см	клетки до 85 см	до 95 см	клетки до 105 см	клетки до 120 см	клетки до 135 см	
----------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	--

Габаритные размеры и масса

MASTER-04 Размер S	Д х Ш х Г (26 см, 25 см, 5 см). Масса 0,278 кг
MASTER-04 Размер M	Д х Ш х Г (26 см, 26 см, 5 см). Масса 0,283 кг
MASTER-04 Размер L	Д х Ш х Г (26 см, 27 см, 5 см). Масса 0,287 кг
MASTER-04 Размер XL	Д х Ш х Г (26 см, 28 см, 5 см). Масса 0,292 кг
MASTER-04 Размер XXL	Д х Ш х Г (26 см, 29 см, 5 см). Масса 0,297 кг
MASTER-04 Размер XXXL	Д х Ш х Г (26 см, 30 см, 5 см). Масса 0,303 кг

4ARMY-SN-03						
Общее описание Ортез обездвиживает плечевой и плечелоктевой суставы и лопатку. Утепляет плечо, выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Указания по применению и принципы использования ортеза определяет лечащий врач. Показания • при посттравматическом консервативном и хирургическом лечении повреждений плечевого, плечелоктевого и локтевого суставов • при острых и хронических болевых синдромах плечевого сустава и плеча в стадии посттравматических и дегенеративных изменений, и болезненных процессов • при предрасположенности к вывихам плечевого сустава. Технические характеристики						
Размер XS Обхват руки 23,5-26 см	Размер S Обхват руки 26,5-28 см	Размер M Обхват руки 28,5-31 см	Размер L Обхват руки 31,5-34 см	Размер XL Обхват руки 34,5-36 см	Размер XXL Обхват руки 36,5-40 см	Размер XXXL Обхват руки 40,5-45 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-03 Размер XS	Д х Ш х Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-03 Размер S	Д х Ш х Г (15 см, 12 см, 6 см). Масса 0,057 кг
4ARMY-SN-03 Размер M	Д х Ш х Г (16 см, 12 см, 6 см). Масса 0,062 кг

4ARMY-SN-03 Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 12 см, 6 см). Масса 0,067 кг
4ARMY-SN-03 Размер XL	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 6 см). Масса 0,072 кг
4ARMY-SN-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (19 см, 12 см, 6 см). Масса 0,077 кг
4ARMY-SN-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (20 см, 12 см, 6 см). Масса 0,083 кг

4ARMY-SN-05					
Общее описание Универсальность изделия – благодаря двусторонней функции стабилизатор можно применять, как на правое, так и на левое плечо. Комфорт использования — за счет малого массаа изделие не мешает при выполнении повседневных занятий. Поддержка надлежащей гигиены — пациент может в любой момент самостоятельно снять и опять наложить ортез без посторонней помощи. Удобство использования – ортез легко накладывается и снимается самим пациентом. Показания - после перенесенных травм плечевой области и предплечья; после консервативного и хирургического лечения локтевого и плечевого суставов; - при центральных и периферических параличах верхней конечности. Технические характеристики					
Размер S Длина предплечья и кисти 30-36 см	Размер M Длина предплечья и кисти 36,5-42 см	Размер L Длина предплечья и кисти 42,5-48 см	Размер XL Длина предплечья и кисти 48,5-54 см	Размер XXL Длина предплечья и кисти 54,5-60 см	Размер XXXL Длина предплечья и кисти 60,5-64 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-05 Размер S	Д x Ш x Г (13 см, 11 см, 6 см). Масса 0,046 кг
4ARMY-SN-05 Размер M	Д x Ш x Г (13 см, 12 см, 6 см). Масса 0,049 кг
4ARMY-SN-05 Размер L	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-05 Размер XL	Д x Ш x Г (15 см, 12 см, 6 см). Масса 0,055 кг
4ARMY-SN-05 Размер XXL	Д x Ш x Г (16 см, 12 см, 6 см). Масса 0,058 кг
4ARMY-SN-05 Размер XXXL	Д x Ш x Г (17 см, 12 см, 6 см). Масса 0,061 кг

Общее описание

Ортопедический жилет на плечо и ключицу изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной трикотажной тканью со свойствами липучки. Анатомическая форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Жилет двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Дополнительная липучка способствует точному расположению охраняемой конечности строго согласно рекомендациям врача. Пациент может в любой момент самостоятельно снять жилет и повторно наложить его

**Показания**

- вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе,
- острых болевых синдромов в плечевом суставе,
- повреждения мягких тканей туловища,
- хирургических операций плечевого сустава,
- необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность
- после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча.

Технические характеристики

Размер S Обхват грудной клетки до 75 см	Размер M Обхват грудной клетки до 85 см	Размер L Обхват грудной клетки до 95 см	Размер XL Обхват грудной клетки до 105 см	Размер XXL Обхват грудной клетки до 120 см	Размер XXXL Обхват грудной клетки до 135 см
--	--	--	--	---	--

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-08 Размер S	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
4ARMY-SN-08 Размер M	Д x Ш x Г (15 см, 12 см, 6 см). Масса 0,058 кг
4ARMY-SN-08 Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 12 см, 6 см). Масса 0,064 кг
4ARMY-SN-08 Размер XL	Д x Ш x Г (17 см, 12 см, 6 см). Масса 0,070 кг
4ARMY-SN-08 Размер XXL	Д x Ш x Г (18 см, 12 см, 6 см). Масса 0,074 кг
4ARMY-SN-08 Размер XXXL	Д x Ш x Г (19 см, 12 см, 6 см). Масса 0,079 кг

4ARMY-SN-15

Общее описание

Ортез 4ARMY-SN-15 это универсальная перевязь на кисть, которую можно носить на левой и на правой руке. Ремень из двухсторонней велкроткани с возможностью регулировки длины и универсального застегивания при помощи липучек велкро. На одном конце ремня есть пластиковая пряжка, на другом поворотный карабин, позволяющий быстро снять и одеть перевязь. На ремне есть мягкая защита на шею. Ортез имеет расстегиваемую подмассажу на кисть, которая снизу имеет ортопедические вставки. Изделие можно носить вместе с другими ортезами верхних конечностей.

Показания

- после травм плеча, предплечья и руки
- при неврологических расстройствах
- в дополнении с другими ортезами верхних конечностей

Технические характеристики



Универсальный размер, доступно на левую и правую руку.

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SN-15 Размер универсальный	Д x Ш x Г (14 см, 12 см, 6 см). Масса 0,052 кг
----------------------------------	--

4ARMY-SL-10

Общее описание

Ортез 4ARMY-SL-10-это анатомическая ортез плеча изготовлен из усиленного сырья, характеризующегося высокой прочностью, мягкостью и высокой эластичностью, что безусловно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует правильную компрессию, обеспеченного сустава. Ортез 4ARMY-SL-10- это спортивный инструмент для борьбы с нестабильностью плечевого сустава.

Показания

- нестабильность плеча,
- повреждение вращательного кольца,
- тендомиопатия в области плеча,
- профилактически в спорте.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Обхват руки 26-28 см	Обхват руки 29-31 см	Обхват руки 32-34 см	Обхват руки 35-36 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-SL-10 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 15 см, 6 см). Масса 0,102 кг
4ARMY-SL-10 Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 15 см, 6 см). Масса 0,107 кг
4ARMY-SL-10 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 6 см). Масса 0,112 кг
4ARMY-SL-10 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 6 см). Масса 0,119 кг

4ARMY-B-06

Общее описание

Ортез 4ARMY-B-06 это универсальная перевязь на кисть, которую можно носить на левой и на правой руке. Ремень из двухсторонней велкротки с возможностью регулировки длины и универсального застегивания при помощи липучек велкро. На одном конце ремня есть пластиковая пряжка, на другом поворотный карабин, позволяющий быстро снять и одеть перевязь. На ремне есть мягкая защита на шею. Изделие можно носить вместе с другими ортезами верхних конечностей.

Показания

- после травм плеча, предплечья и руки
- при неврологических расстройствах
- в дополнении с другими ортезами верхних конечностей

Технические характеристики

Универсальный размер, на левую и правую руку.



Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-06 Размер универсальный	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
--	--

4ARMY-B-08

Общее описание

Ортез 4ARMY-B-08 являет собой специальную перевязь, изготовленную из приятного для кожи и прочного материала. Универсальный размер продукта и двусторонность обеспечивают возможность приспособления ортопедии практически к любому



пациенту и устраняют необходимость поддержания высоких запасов в магазинах.

Показания

- повреждение вращательного кольца
- повреждение вертлужной губы
- вывих плеча
- операция плечевого сустава
- при консервативном лечении плеча (воспаление сухожилий, вывих плеча, перелом плечевой кости)
- артроскопия плечевого сустава.

Технические характеристики

Универсальный размер продукта.

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-08 Размер универсальный

Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг

OKG-26

Общее описание

Ортопедический жилет на плечо и ключицу изготовлен из полиуретановой пенки, покрытой с двух сторон обкладочной трикотажной тканью со свойствами липучки. Анатомическая форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Жилет двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Дополнительная липучка способствует точному расположению охраняемой конечности строго согласно рекомендациям врача. Анатомическая форма изделия и размерный ряд позволяют идеально подобрать его к телу пациента.

Показания

- вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе,
- острых болевых синдромов в плечевом суставе,
- повреждения мягких тканей туловища,
- хирургических операций плечевого сустава,
- необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность
- после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча.

Технические характеристики



Размер S

Обхват грудной
клетки
до 75 см

Размер M

Обхват грудной
клетки
до 85 см

Размер L

Обхват грудной
клетки
до 95 см

Размер XL

Обхват грудной
клетки
до 105 см

Размер XXL

Обхват грудной
клетки
до 120 см

Размер XXXL

Обхват грудной
клетки
до 135 см

Габаритные размеры и масса

OKG-26 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 41 см, 3 см). Масса 0,199 кг
OKG-26 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 43 см, 3 см). Масса 0,213 кг
OKG-26 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 44 см, 3 см). Масса 0,221 кг
OKG-26 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 45 см, 3 см). Масса 0,229 кг
OKG-26 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 46 см, 3 см). Масса 0,237 кг
OKG-26 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 48 см, 3 см). Масса 0,253 кг

OKG-21	
Общее описание Ортез плеча OKG-21 является изделием, предназначенным как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Ортез оснащен функцией централизации головки плечевой кости и фиксирует ее в соответствующем положении во впадине. Это способствует правильной подвижности сустава и его соответствующему питанию. Показания • нестабильность плеча • повреждение кольца ротаторов • тендомиопатия в области плеча • профилактически в спорте Технические характеристики	
Универсальный размер	Обхват грудной клетки мин 70 — макс 135 см



Габаритные размеры и масса

OKG-21 Размер универсальный	Д x Ш x Г (35 см, 22 см, 7 см). Масса 0,27 кг
------------------------------------	---

AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR	
Общее описание ОРТЕЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА С РОТАЦИОННОЙ ПОДУШКОЙ 15° И 30° Повреждение суставной губы плеча бывают у спортсменов в контактных видах спорта (футбол, регби) или таких, где есть броски (бейсбол) или частые повторяющиеся поднятие руки над головой (плавание, волейбол), а также поднимание и опускание тяжелых предметов. Показания Повреждение суставной губы плеча типа SLAP - Повреждение типа Банкарта - вывих плеча - артроскопия плечевого сустава - консервативное лечение травм плеча (воспаления сухожилий, вывих плеча, перелом плечевой кости) Технические характеристики	
Универсальный размер	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см

Габаритные размеры и масса

AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR Размер универсальный	Д х Ш х Г (49 см, 40 см, 16 см). Масса 0,97 кг
---	---

AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR	
Общее описание ОРТЕЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА С ОТВОДЯЩЕЙ ПОДУШКОЙ 10° И 15° Ортез удерживает и обездвиживает плечевой сустав в стабильном отведенном положении. Анатомическая система несущих ремней с регулировкой длины спроектирована так, чтобы пациент мог самостоятельно их регулировать и надеть. Имеет две пластиковые пряжки и анатомические несущие ремни, а также 2 мягкие пелоты и переднюю пряжку, которую можно застегнуть или расстегнуть одной рукой. Трехточечная система крепления делает ортез легким в надевании, его конструкция устраняет давление на шею, увеличивая комфорт. Показания повреждение вращающей манжеты плеча - повреждение суставной губы плеча - вывих плеча - операция на плечевом суставе - консервативное лечение травм плеча (воспаления сухожилий,	

вывих плеча, перелом плечевой кости)	
Технические характеристик	
Универсальный размер	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см

Габаритные размеры и масса

AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR Размер универсальный	Д х Ш х Г (48 см, 30 см, 16 см). Масса 0,83 кг
--	--

AM-SOB-03/AIR						
Общее описание Ортез AM-SOB-03 двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Конструкция поддержки конечности держится за счет регулируемой плечевой ленты, способствующей точному расположению конечности на нужной высоте. Широкий поддерживающий ремень обеспечивает равномерное распределение массаа по всей длине спины. Показания Ортез используется: - после перенесенных травм плечевой области и предплечья; после консервативного и хирургического лечения локтевого и плечевого суставов; - при центральных и периферических параличах верхней конечности Технические характеристики						
Размер S Длина предплечья и кисти	Размер M Длина предплечья и кисти	Размер L Длина предплечья и кисти	Размер XL Длина предплечья и кисти	Размер XXL Длина предплечья и кисти	Размер XXXL Длина предплечья и кисти	
30-36 см	36,5-42 см	42,5-48 см	48,5-54 см	54,5-60 см	60,5-64 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-03/AIR Размер S	Д х Ш х Г (28 см, 44 см, 4 см). Масса 0,065 кг
AM-SOB-03/AIR Размер M	Д х Ш х Г (20 см, 44 см, 4 см). Масса 0,069 кг
AM-SOB-03/AIR Размер L	Д х Ш х Г (22 см, 44 см, 4 см). Масса 0,073 кг
AM-SOB-03/AIR Размер XL	Д х Ш х Г (24 см, 44 см, 4 см). Масса 0,077 кг

AM-SOB-03/AIR Размер XXL	Д x Ш x Г (25 см, 44 см, 4 см). Масса 0,079 кг
AM-SOB-03/AIR Размер XXXL	Д x Ш x Г (26 см, 44 см, 4 см). Масса 0,081 кг

MASTER-03			
Общее описание Неврологический ортез плеча MASTER-03 есть в двух версиях в зависимости от расположения травмы плечевого сплетения: Верхний паралич (тип Erba-Duchenne) — относится к уровню C5 и C6 (у примерно 60% больных) — это повреждение верхней части плечевого сплетения, которое отвечает за движения плеча и локтя. В этом случае используется короткий ортез MASTER-03. Нижний паралич (тип Klumpke-Dejerine) — повреждение C8-Th1 — (появляется реже — у примерно 5% больных). Это травмы в нижней части плечевого сплетения, которое отвечает за запястье и движения ладони. Также часто в ситуациях, когда паралич Klumpke-Dejerine присутствует вместе с синдромом Хорнера. В этом случае нужно использовать длинный ортез MASTER-03 с перевязью на руку. Показания • гемипарез (гемиплегия) • повреждение плечевого сплетения • травма плеча (вывих головки плечевой кости). Технические характеристики			
Размер S Обхват руки 25-29 см	Размер M Обхват руки 29,5-33 см	Размер L Обхват руки 33,5-37 см	Размер XL Обхват руки 37,5-41 см
Размер S Обхват грудной клетки 80-110 см	Размер M Обхват грудной клетки 80-110 см	Размер L Обхват грудной клетки 90-140 см	Размер XL Обхват грудной клетки 90-140 см

Габаритные размеры и масса

MASTER-03 Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 27 см, 5 см). Масса 0,271 кг
MASTER-03 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 27 см, 5 см). Масса 0,279 кг
MASTER-03 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 27 см, 5 см). Масса 0,287 кг
MASTER-03 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 30 см, 5 см). Масса 0,349 кг

AM-SOB-02

Общее описание

Универсальность изделия – благодаря двусторонней функции стабилизатор можно применять, как на правое, так и на левое плечо. Соответственные точки поддержки защищают плечевой сустав от дальнейших травм.

Комфорт использования — за счет малого массаа изделия пациент ощущает комфорт при ношении ортеза.

Возможность постоянно соблюдать надлежащую гигиену тела – пациент может в любой момент самостоятельно снять и опять наложить ортез.

Существует возможность, чтобы поддерживать надлежащий уровень гигиены тела пациента без посторонней помощи.

Показания

- вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, — острых болевых синдромов в плечевом суставе,
- повреждения мягких тканей плечевого пояса и плеча
- хирургических операций плечевого сустава и локтя (не требующих гипсовой повязки)
- необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность (перелом шейки плечевой кости)
- после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча.

Технические характеристики



Размер S Обхват грудной клетки	Размер M Обхват грудной клетки	Размер L Обхват грудной клетки	Размер XL Обхват грудной клетки	Размер XXL Обхват грудной клетки	Размер XXXL Обхват грудной клетки
до 75 см	до 85 см	до 95 см	до 105 см	до 120 см	до 135 см

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-02 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 32 см, 8 см). Масса 0,251 кг
AM-SOB-02 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 32 см, 8 см). Масса 0,257 кг
AM-SOB-02 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 32 см, 8 см). Масса 0,264 кг
AM-SOB-02 Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 32 см, 8 см). Масса 0,272 кг
AM-SOB-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 32 см, 8 см). Масса 0,281 кг
AM-SOB-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (31 см, 32 см, 8 см). Масса 0,292 кг

AM-SOB-02 (детский)		
Общее описание Модель стабилизирует плечо и локоть в необходимом (согласно предписанию врача) положении, комфортна и проста в использовании. Не подходит для травм требующих жесткую степень фиксации. Компактная конструкция имеет регулируемые элементы, что позволяет подогнать параметры ортеза под индивидуальные потребности -- степень компрессии и положение сгиба локтя. Ребенок может самостоятельно снимать и надевать ортез, причем отрегулированные параметры останутся без изменений. Удобные плечевые лямки перекрещиваются на спине и равномерно распределяют нагрузку на плечи. Модель является универсальной – на левую и правую конечность. Показания - вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе, — острых болевых синдромов в плечевом суставе, - повреждения мягких тканей плечевого пояса и плеча - хирургических операций плечевого сустава и локтя (не требующих гипсовой повязки) - необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность (перелом шейки плечевой кости) - после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча. Технические характеристики		
Размер 1	Размер 2	
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
50-57 см	58-65 см	до 75 см

Габаритные размеры и масса


AM-SOB-02 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (15 см, 24 см, 5 см). Масса 0,108 кг
AM-SOB-02 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (16 см, 24 см, 5 см). Масса 0,115 кг
AM-SOB-02 (детский) Размер 3	Д x Ш x Г (17 см, 24 см, 5 см). Масса 0,123 кг

AM-SOB-03	
Общее описание Ортез AM-SOB-03 относится к группе 4MEDIC. Он обездвиживает и поддерживает верхнюю конечность. Форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Ортез двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Конструкция поддержки конечности держится за счет	

регулируемой плечевой ленты, способствующей точному расположению конечности на нужной высоте. Широкий поддерживающий ремень обеспечивает равномерное распределение массаа по всей длине спины. Показания - после перенесенных травм плечевой области и предплечья; после консервативного и хирургического лечения локтевого и плечевого суставов; - при центральных и периферических параличах верхней конечности - Технические характеристики					
Размер S Длина предплечья и кисти	Размер M Длина предплечья и кисти	Размер L Длина предплечья и кисти	Размер XL Длина предплечья и кисти	Размер XXL Длина предплечья и кисти	Размер XXXL Длина предплечья и кисти
30-36 см	36,5-42 см	42,5-48 см	48,5-54 см	54,5-60 см	60,5-64 см

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-03 Размер S	Д x Ш x Г (21 см, 42 см, 4 см). Масса 0,073 кг
AM-SOB-03 Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 44 см, 4 см). Масса 0,079 кг
AM-SOB-03 Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 44 см, 4 см). Масса 0,084 кг
AM-SOB-03 Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 44 см, 4 см). Масса 0,088 кг
AM-SOB-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (24 см, 44 см, 4 см). Масса 0,093 кг
AM-SOB-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (25 см, 44 см, 4 см). Масса 0,099 кг

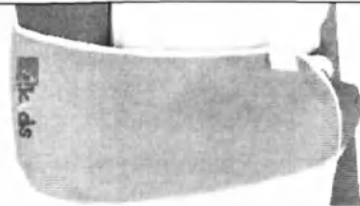AM-SOB-03 (детский)	
Общее описание Ортез AM-SOB-03 относится к группе ортез плечевого сустава HUMERI STABILIZER. Конструкция поддержки конечности держится за счет регулируемой плечевой ленты, способствующей точному расположению конечности на нужной высоте. Широкий поддерживающий ремень обеспечивает равномерное распределение массаа по всей длине спины. Показания - после перенесенных травм плечевой области и предплечья; после консервативного и хирургического лечения локтевого и плечевого суставов; - при центральных и периферических параличах верхней конечности Технические характеристик	

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Длина А	Длина А	Длина А
18-24 см	24,5-30 см	30,5-36 см

Габаритные размеры и масса

АМ-SOB-03 (детский) Размер 1	Д х Ш х Г (16 см, 30 см, 2 см). Масса 0,058 кг
АМ-SOB-03 (детский) Размер 2	Д х Ш х Г (17 см, 31 см, 2 см). Масса 0,065 кг
АМ-SOB-03 (детский) Размер 3	Д х Ш х Г (18 см, 32 см, 2 см). Масса 0,071 кг

4ARMY-B-04			
Общее описание Ортез состоит из 3 слоев: прочной велкроу ткани из полиамида, разгружающей пенки EVA и полиамидной махровой ткани 3D. Внешний слой из велкроу ткани позволяет свободно пристегивать липучками ортопедические шины и адаптировать изделие к телу пациента благодаря гибкости при застегивании. Пенка EVA защищает от воздействия внешних жестких частей ортеза на тело, а внутренний объемный 3D слой хорошо вентилирует кожу и отводит пот. Кроме того, этот материал водостойкий. Показания • Верхний паралич (тип Erbja-Duchenne) • Нижний паралич (тип Klumpke-Dejerine) • Паралич Эрба и Klumpke-Dejerine (смешанный) Технические характеристики			
Размер S Обхват руки 25-29 см	Размер M Обхват руки 29,5-33 см	Размер L Обхват руки 33,5-37 см	Размер XL Обхват руки 37,5-41 см
Размер S Обхват грудной клетки 80-110 см	Размер M Обхват грудной клетки 80-110 см	Размер L Обхват грудной клетки 90-140 см	Размер XL Обхват грудной клетки 90-140 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-04 Размер S	Д х Ш х Г (30 см, 22 см, 5 см). Масса 0,251 кг
4ARMY-B-04 Размер M	Д х Ш х Г (31 см, 23 см, 5 см). Масса 0,279 кг
4ARMY-B-04 Размер L	Д х Ш х Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-04 Размер XL	Д х Ш х Г (34 см, 24 см, 5 см). Масса 0,310 кг

4ARMY-B-05

Общее описание

Стабилизатор плеча обладает высокой прочностью, обеспечивает максимальное прилегание к телу и защищает от натирания жестких элементов конструкции. Форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию ортеза к телу пациента. Ортез двустороннего ношения – возможность использования, как на правое, так и на левое плечо. Конструкция поддержки плеча держится за счет регулируемой плечевой ленты и лямок на подкладке, скрещенных на спине и изделии. Это дает возможность точно расположить охраняемую конечность, строго согласно рекомендациям врача.



Показания

- вывихов (в качестве временной защиты) в плечевом суставе,
- острых болевых синдромов в плечевом суставе,
- повреждения мягких тканей плечевого пояса и плеча
- хирургических операций плечевого сустава и локтя (не требующих гипсовой повязки)
- необходимости поддержать и частично обездвижить верхнюю конечность (перелом шейки плечевой кости)
- после снятия гипсовой иммобилизации, в качестве стабилизатора плеча.

Технические характеристики

Размер S Обхват грудной клетки	Размер M Обхват грудной клетки	Размер L Обхват грудной клетки	Размер XL Обхват грудной клетки	Размер XXL Обхват грудной клетки	Размер XXXL Обхват грудной клетки
до 75 см	до 85 см	до 95 см	до 105 см	до 120 см	до 135 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-B-05 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 22 см, 5 см). Масса 0,251 кг
4ARMY-B-05 Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 22 см, 5 см). Масса 0,264 кг
4ARMY-B-05 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 23 см, 5 см). Масса 0,285 кг
4ARMY-B-05 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 23 см, 5 см). Масса 0,299 кг
4ARMY-B-05 Размер XXL	Д x Ш x Г (34 см, 24 см, 5 см). Масса 0,322 кг
4ARMY-B-05 Размер XXXL	Д x Ш x Г (35 см, 24 см, 5 см). Масса 0,237 кг

OKG-05			
Общее описание Ортез верхней конечности STROKE предназначен для позиционирования и стабилизации вялой верхней конечности сразу после инсульта. Ортез позиционирует верхнюю конечность в функциональный способ, т.е. так чтобы сохранялась мышечная память, а реабилитация, соответственно, происходила быстрее и лучше. Ортез верхней конечности STROKE предотвращает постинсультную спастичность и помогает больному быть самостоятельным. Показания - инсульт - травма головного мозга - травма плечевого сплетения - амиотрофический боковой склероз (БАС) - поперечное воспаление сердечника - внутриутробный синдром - синдром постполиомиелита - другие неврологические расстройства Технические характеристики			
Размер S Масса пациента 45-63 кг Рост пациента (А) 152-160 см	Размер M Масса пациента 60-83 кг Рост пациента (А) 160,5 — 178 см	Размер L Масса пациента 81-106 кг Рост пациента (А) 178,5 — 193 см	Размер XL Масса пациента 106 кг Рост пациента (А) 193 см

Габаритные размеры и масса

OKG-05 Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 15 см, 6 см). Масса 0,16 кг
OKG-05 Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 15 см, 6 см). Масса 0,164 кг
OKG-05 Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 15 см, 6 см). Масса 0,17 кг
OKG-05 Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 15 см, 6 см). Масса 0,175 кг

AM-SL-03

Общее описание

Ортез верхней конечности AM-SL-03 это профессиональный продукт для идеальной фиксации и иммобилизации суставов локтя, предплечья и запястья. Это единственный на рынке продукт, гарантирующий наилучший уровень стабилизации верхней конечности и может успешно выступать в качестве замены гипсовой иммобилизации. Во-первых, позволяет точно выставить необходимые углы при лечении. Во-вторых, часто при переломах повреждаются кровеносные сосуды. Гипсовая иммобилизация при этом не позволяет контролировать кровоснабжение, чтобы не допустить некроз. Поэтому, применение стабилизирующего верхнюю конечность ортеза AM-SL-03 является наилучшим решением для ее эффективной иммобилизации.



Показания

- эпикондильный перелом плечевой кости
- вывих локтя
- дистальная лучевая травма локтевого сустава
- травма предплечья
- перелом локтевой кости
- перелом Монтеджи
- перелом Галеацци
- перелом Эссекс-Лопрести
- травмы сухожилий и связок
- травмы запястья
- хронические травмы локтя
- Гиперэкстензия локтя

Таблица размеров

Технические характеристики

Размер универсальный	Обхват плеча мин 28 – макс 35 см	Длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья мин 22 — макс 31 см
----------------------	-------------------------------------	---

Габаритные размеры и масса

AM-SL-03 Размер универсальный	Д x Ш x Г (33,5x23,5-27,7x11-24). Масса 0,961 кг
-------------------------------	--

AM-SOB-01	
Общее описание СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ОРТЕЗ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ – предназначена для поддержки и частичной иммобилизации верхней конечности в случае пареза или паралича. Показания • Гемиплегия плечевого сустава (заяля), • Иммобилизация локтевого сустава (при травмах, при эпикондилите или воспалении вокруг медиального надмыщелка плечевой кости, дислокациях), • Иммобилизация после перелома лопатки • Обезболивающая иммобилизация руки и предплечья • Простой вывих руки • Иммобилизация руки после операции • Перелом плеча • Перелом плечевой кости • Паралич плечевого сплетения • Иммобилизация после травмы локтя Технические характеристики	
Размер Универсальный размер на левую или правую сторону	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-01 Размер универсальный	Д x Ш x Г (23 см, 47 см, 4 см). Масса 0,229 кг
--------------------------------	--

AM-SOB-05	
Общее описание Плечевой ортез AM-SB-05 выполнен в виде двух расстегнутых рукавов с широкой задней регулировкой застежки. Рукава имеют открытую конструкцию и дополнительный ремень на липучке, с помощью которого вы без проблем адаптируете ортез к своим размерам. Ортез также имеет специальные крестовые ремни, которые обеспечивают адекватную стабилизацию, улучшают положение плеч, влияют на коррекцию осанки и облегчают суставы верхней конечности. Их применение в период заострения обездвиживает плечи и уменьшает воспаление. Показания - Замороженное плечо - Синдром болезненного плеча (ZBB)	

- Нестабильность плеча - Вялость суставной сумки Технические характеристики	
Размер универсальный Ширина плечей - мин 26 – макс 30,5 см X-Size - мин 31 – макс 36 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-05 Размер универсальный	Д x Ш x Г (24 см, 20 см, 6 см). Масса 0,327 кг
---------------------------------------	--

AM-SOB-06	
Общее описание Модель AM-SOB-06 – стабилизатор локтевого сустава с регулировкой угла отвода внутреннего вращения. Стабилизатор выполнен из многослойного неэластичного текстиля. Данная модель универсальна, выпускается в одном размере и легко подгоняется под индивидуальные параметры. Показания - повреждение кольца ротатора - повреждение вертлужной впадины - вывих плеча - хирургия плеча - при консервативном лечении плеча (тендинит, вывих плеча, перелом плечевой кости) - артроскопия плеча Технические характеристики	
Размер универсальный, Обхват груди Мин 70 – макс 145 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-06 Размер универсальный	Д x Ш x Г (25 см, 39 см, 6 см). Масса 0,325 кг
---------------------------------------	--

AM-SOB-07		
Общее описание Ортез на плечо и руку AM-SOB-07 с эластичным стабилизирующим рукавом спроектирован и изготовлен так чтобы создавать как можно меньше неудобств пациенту, и чтобы он мог самостоятельно надеть ортез. Легкая конструкция облегчает ежедневное использование. Ортез пошит из материала с верхом из велкроткани, с возможностью обрезки для лучшей адаптации под пациента. Показания • иммобилизация после травм и операций плеча, руки, локтя и предплечья • переломы плеча локтя, предплечья • вывих плеча • вывих локтевого сустава • повреждения мягких тканей верхней конечности требующее иммобилизации (ушибы, Технические характеристики		
Размер М большой бугорок плечевой кости – головка пятой пястной кости 50-60 см	Размер L большой бугорок плечевой кости – головка пятой пястной кости 60,5-75 см	

Габаритные размеры и масса

AM-SOB-07 Размер М	Д x Ш x Г (42 см, 15 см, 6 см). Масса 0,134 кг
AM-SOB-07 Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 15 см, 6 см). Масса 0,147 кг

AM-SOB-07 (детский)	
Общее описание Детский ортез плеча и руки AM-SOB-07 – иммобилизирующее ортопедическое изделие, которое используется вместо гипса при надмыщелковых переломах плечевой кости, а также при ушибах и вывихах. Ортез выполнен в виде компрессионного рукава, покрывающего всю нижнюю конечность, начиная от плеча и заканчивая кистью. Компактная конструкция выполнена таким образом, что конечность поддерживается в трех отделах: • Плечевой отдел	

• Локтевой отдел • Отдел кисти Показания • иммобилизация после травм и операций плеча, руки, локтя и предплечья • переломы плеча локтя, предплечья • вывих плеча • вывих локтевого сустава • повреждения мягких тканей верхней конечности требующие иммобилизации (ушибы, инфекции) Технические характеристики		
Размер 1 большой бугорок плечевой кости – головка пятой пястной кости 30–40 см	Размер 2 большой бугорок плечевой кости – головка пятой пястной кости 40,5 — 50 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-SOB-07 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (23 см, 10 см, 6 см). Масса 0,086 кг
АМ-SOB-07 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (25 см, 10 см, 6 см). Масса 0,093 кг

MASTER-01	
Общее описание Обширный плечевой элемент вместе с подмышечной пелотой покрывает большую часть тела, что отлично влияет на сильно нарушенную проприоцепцию. Система регулирования поднятия плеча и его притяжения и посещения позволяет расположить конечность в анатомическом месте и получить правильную двигательную картину во время целенаправленной терапии. В изделии применена шина 1RE — одноосная ортопедическая шина, которая кроме широкого диапазона регулировки угла сгибания с шагом 15° отличается наличием регулировки переразгибания сустава от -15° и до -30°. Ладонная шина из алюминия имеет анатомический профиль и продольную систему регулировки. Для точной подгонки изделия к верхней конечности, в плечевой части применены две эластичные полиэтиленовые накладочки, фиксируемые ремнем «на	

липучках» велкро. Показания • гемиплегия (гемиплегия) • повреждение плечевого сплетения • травма плеча (вывих головы плечевой кости) • после внутрисуставных переломов локтя, • посттравматических повреждений совместно запястного и локтевого суставов, • острых воспалений запястного и локтевого суставов, • осколочного перелома верхней конечности в период выздоровления после снятия гипсовой повязки, • воспаления костей верхних конечностей требующего иммобилизации — в острой стадии, • в процессе восстановления и выздоровления, • неврологических заболеваниях центрального и периферического происхождения, • после других операций (хирургия, ортопедия) Технические характеристики			
Универсальная длина от бокового надмыщелка плечевой кости до запястья - мин 22 см — макс 31 см			
Окружность плеча 6 см выше середины локтя - мин 22 см — макс 44 см, Окружность предплечья 6 см ниже середины локтя - мин 22 см — макс 36 см			
Размер S Обхват груди 80-110 см	Размер M Обхват груди 80-110 см	Размер L Обхват груди 90-140 см	Размер XL Обхват груди 90-140 см

Габаритные размеры и масса

MASTER-01 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 48 см, 8 см). Масса 0,665 кг
MASTER-01 Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 50 см, 8 см). Масса 0,691 кг
MASTER-01 Размер L	Д x Ш x Г (29 см, 50 см, 8 см). Масса 0,715 кг
MASTER-01 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 50 см, 8 см). Масса 0,741 кг

Регулировка угла сгибания: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105.

Регулировка угла разгибания: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120.

Шаг регулировки: 15 градусов

Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие или его основные части

Наименование изделия	Общее понятие	Материал	Марка	Страна, производитель
1. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-01 2. Ортез на лучезапястный сустав AS-N 3. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-10 4. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-07 5. Ортез на локтевой сустав MS-L-01 6. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 7. Ортез на локтевой сустав AS-L-02 8. Ортез на локтевой сустав AS-L/F 9. Ортез на локтевой сустав EB-L-02 10. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-04 11. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AS-PL 12. Ортез на плечевой сустав OKG-02 13. Ортез на плечевой сустав AM-SOB 14. Ортез на плечевой сустав AS-B 15. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 16. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 (детский) 17.	Трикотаж	Хлопок/полиэстер	Singiel Jersey	AML DZIANINY, Польша
1. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-05 4. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 5. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 6. Ортез на локтевой сустав AS-L-02 7. Ортез на локтевой сустав AM-SL 8. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 (детский) 10. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR 11. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR (детский) 12. Ортез на локтевой сустав EB-L-02 13. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-13 14. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-07 15. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IR 16. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IRE 17. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IRE 18. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 19. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 20. Ортез на плечевой сустав AM-BX-01 21. Ортез на плечевой сустав AM-BX-02 22. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 23. Ортез на плечевой сустав OKG-01 24. Ортез на плечевой сустав OKG-03 25. Ортез на плечевой сустав AM-KOB 26. Ортез на плечевой сустав AM-KOB (детский) 27. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 28. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 29. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-08 30. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 31. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 32. Ортез на плечевой сустав OKG-26 33. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 34. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 35. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-03/AIR 36. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03 37. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 38. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 (детский) 39. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 40. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 (детский) 41. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-05 42. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы OKG-05 43. Ортез на всю руку AM-SL-03 44. Ортез на всю руку AM-SOB-01 45. Ортез на всю руку AM-SOB-05 46. Ортез на всю руку AM-SOB-06 47. Ортез на всю руку AM-SOB-07 48. Ортез на всю руку AM-SOB-07 (детский) 49. Ортез на всю руку MASTER-01	Трикотаж	Полиэстер, полиуретан	C-460	SANWIL POLSKA Sp. Z o.o., Польша
1. Ортез большого пальца руки AM-D-01, 2. Ортез на пальцы AM-D-01 (детский) 3. Ортез на пальцы AM-D-02 4. Ортез на пальцы AM-D-02 (детский) 5. Ортез на пальцы AM-D-04 6. Ортез на пальцы AM-D-05 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-LM 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-01 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-02 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-02 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 (детский) 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01	Пластиковые пряжки, концевки, фиксаторы	Полиамид	40- 10-17IPA6	ITW ESPANA, S.A. Испания

16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-13 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 23. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-14 25. Ортез на лучезапястный сустав AS-N 26. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-09 27. Ортез на локтевой сустав AM-LX-02 28. Ортез на локтевой сустав AS-L 29. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 30. Ортез на локтевой сустав AM-SL 31. Ортез на локтевой сустав AM-SL-01/CCA 32. Ортез на локтевой сустав AS-L/A 33. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 34. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 (детский) 35. Ортез на локтевой сустав EB-L 36. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R 37. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R (детский) 38. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-03 39. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-04 40. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 41. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/1R 42. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/1RE 43. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AS-PL 44. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SL-02 45. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 46. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 47. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 48. Ортез на плечевой сустав OKG-03 49. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-01 50. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-03 51. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 52. Ортез на плечевой сустав OKG-21 53. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 54. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 55. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03 56. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы OKG-05 57. Ортез на всю руку AM-SL-03 58. Ортез на всю руку AM-SOB-06 59. Ортез на всю руку MASTER-01				
1. Ортез большого пальца руки AM-D-01, 2. Ортез на пальцы AM-D-01 (детский) 3. Ортез на пальцы AM-D-02 4. Ортез на пальцы AM-D-02 (детский) 5. Ортез на пальцы AM-D-04 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-LM 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N (детский) 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 (детский) 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-02 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 (детский) 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 22. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-15 23. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-07 24. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-08 25. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-09 26. Ортез на локтевой сустав AM-SL-01/CCA 27. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R 28. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-04 29. Ортез на плечевой сустав OKG-03 30. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 31. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 32. Ортез на всю руку AM-SL-03	SANMED, полиуретановое трикотажное полотно с покрытием из полиуретана	Полиуретан	1014/01487/ А	SANWIL POLSKA Sp. Z. o. o. , Польша
1. Ортез большого пальца руки AM-D-01, 2. Ортез на пальцы AM-D-01 (детский) 3. Ортез на пальцы AM-D-05 4. Ортез на кисть AM-OSN-U-12 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-LM 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-01 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-02 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01/CCA 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-12	Трикотаж	Хлопок	Pirate	AMARO Sp. Jawna, Польша

16. Ортез на лучезапястный сустав AS-N 17. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-15 18. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-07 19. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-09 20. Ортез на лучезапястный сустав OKG-20 21. Ортез на локтевой сустав AM-SL-02 22. Ортез на локтевой сустав MS-L-01 23. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 24. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 25. Ортез на локтевой сустав AS-L-02 26. Ортез на локтевой сустав AS-L/F 27. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 28. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 (детский) 29. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR 30. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR (детский) 31. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07 32. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 33. Ортез на плечевой сустав AM-BX-01 34. Ортез на плечевой сустав OKG-01 35. Ортез на плечевой сустав OKG-03 36. Ортез на плечевой сустав AM-SOB 37. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 38. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 39. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 40. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-03/AIR 41. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 42. Ортез на всю руку AM-SOB-01 43. Ортез на всю руку MASTER-01 44. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 45. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 46. Ортез на пальцы FIX-KG-14 47. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08				
1. Ортез на пальцы AM-D-05 2. Ортез на пальцы AM-SP-05 3. Ортез на пальцы AM-OSN-U-22 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-LM 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-01 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-02 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-02 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 (детский) 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-02 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-13 18. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-15 19. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-09 20. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-20 21. Ортез на локтевой сустав AM-LX-02 22. Ортез на локтевой сустав AS-L/F 23. Ортез на плечевой сустав AS-B 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 25. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 (детский) 26. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 27. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 28. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-14 29. Ортез на локтевой сустав EB-L-02 30. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 31. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-06 32. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-05 33. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-06 34. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-08 35. Ортез на всю руку AM-SOB-07 36. Ортез на всю руку AM-SOB-07 (детский) 37. Ортез на пальцы AM-D-02 38. Ортез на пальцы AM-D-02 (детский) 39. Ортез на пальцы AM-D-04 40. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-16 41. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 42. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-13 43. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-07 44. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-08 45. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-04 46. Ортез на плечевой сустав AM-BX-02 47. Ортез на плечевой сустав OKG-03 48. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 49. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-04 50. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-15 51. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 52. Ортез на плечевой сустав FIX-KG-12	Трикотаж	Хлопок, вискоза, полиэстер	MODALN A	BOWI-STYL. Польша
1. Ортез на пальцы AM-SP-05 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-02 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N (детский) 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 (детский) 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав U-SN	Трикотажные ткани из синтетических нитей	полиэстер, полиамид	Tencel	WAMATEX P.P.H.U. Польша

8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-10 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-11 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-06 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-16 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-10 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-11 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-11 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-15 17. Ортез на лучезапястный сустав AM-DON-01 18. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-01 19. Ортез на лучезапястный сустав OKG-17 20. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-12 21. Ортез на лучезапястный сустав OKG-24 22. Ортез на лучезапястный сустав OKG-25 23. Ортез на локтевой сустав EB-L 24. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-01 25. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-03 26. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-04 27. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-05 28. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-19 29. Ортез на локтевой сустав OKG-18 30. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-04 31. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-06 32. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-B-03 33. Ортез на локтевой сустав OKG-22 34. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы FIX-KG-20 35. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-12 36. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SL-02 37. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AM-OSN-U-17 38. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы EB-L-01 39. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-01 40. Ортез на плечевой сустав TB-02 41. Ортез на плечевой сустав TB-03 42. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-03 43. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 44. Ортез на плечевой сустав OKG-21 45. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03 46. Ортез на всю руку AM-SL-03 47. Ортез на всю руку AM-SOB-05 48. Ортез на всю руку AM-SOB-06 49. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-07 50. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-08 51. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 52. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы PCO-A-01 53. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы PCO-A-02 54. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-06 55. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы PCO-A-07 56. Ортез на плечевой сустав AM-BX-03 57. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-04 58. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-10 59. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 60. Ортез на кисть 4ARMY-B-13 61. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-13 62. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-02 63. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-13 64. Ортез на лучезапястный сустав OKG-23 65. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-07				
1. Ортез на кисть AM-OSN-U-12 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-12 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 4. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 5. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR 6. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR (детский) 7. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-05 8. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07 9. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 10. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-B-03 11. Ортез на локтевой сустав OKG-22 12. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IR 13. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IRF 14. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы FIX-KG-20 15. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SL-02 16. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы EB-L-01 17. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 18. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-04 19. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 20. Ортез на плечевой сустав OKG-02 21. Ортез на плечевой сустав OKG-03 22. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 23. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-01 24. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 25. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-03 26. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-05 27. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 28. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-06 29. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-08 30. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 31. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 32. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-03/AIR 33. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03	Трикотаж	Полиэстер	Dz. Lezka N4 130g 75D	P.P.H.U. KOLREX. Польша

34. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 35. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 (детский) 36. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-04 37. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы OKG-05 38. Ортез на всю руку AM-SL-03 39. Ортез на всю руку AM-SOB-01 40. Ортез на всю руку AM-SOB-06 41. Ортез на всю руку MASTER-01 42. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N 43. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05 44. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-11 45. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-14 46. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-02 47. Ортез на локтевой сустав AM-LX-02 48. Ортез на локтевой сустав AS-L/A 49. Ортез на всю руку AM-SOB-07 50. Ортез на всю руку AM-SOB-07 (детский) 51. Ортез на пальцы FIX-KG-14 52. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08				
1. Ортез на пальцы AM-D-03 2. Ортез на пальцы AM-D-04 3. Ортез на пальцы AM-SP-04 4. Ортез на пальцы AM-SP-05 5. Ортез на пальцы AM-OSN-U-22 6. Ортез на кисть 4ARMY-B-13 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-02 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N (детский) 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 (детский) 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав U-SN 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-02 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-01 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-06 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-10 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-11 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-11 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-15 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 23. Ортез на лучезапястный сустав AM-DON-01 24. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-01 25. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-14 26. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-07 27. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-08 28. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-10 29. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-20 30. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-12 31. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-14 32. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-07 33. Ортез на лучезапястный сустав OKG-24 34. Ортез на лучезапястный сустав OKG-25 34. Ортез на локтевой сустав AM-LX-02 35. Ортез на локтевой сустав AM-SL-02 36. Ортез на локтевой сустав R4M-SL-01 37. Ортез на локтевой сустав AS-L 38. Ортез на локтевой сустав AM-SL 39. Ортез на локтевой сустав U-SL 40. Ортез на локтевой сустав EB-L 41. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-09 42. Ортез на локтевой сустав EB-L-02 43. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-06 44. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-08 45. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-12 46. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AS-PL 47. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SL-02 48. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-06 49. Ортез на плечевой сустав AM-BX-02 50. Ортез на плечевой сустав OKG-01 51. Ортез на плечевой сустав AM-KOB 52. Ортез на плечевой сустав AM-KOB (детский) 53. Ортез на плечевой сустав TB-02 54. Ортез на плечевой сустав TB-03 55. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 56. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-08 57. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 58. Ортез на плечевой сустав OKG-26 59. Ортез на плечевой сустав OKG-21 60. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03 61. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 62. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 (детский) 63. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-05 64. Ортез на всю руку AM-SOB-05 65. Ортез на всю руку AM-SOB-06 66. Ортез на плечевой сустав AS-B	Липучки велкро	Полиамид	VL 440	GEISA FABRICS, S.L., Барселона, Испания
1. Ортез на пальцы AM-SP-05 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-02 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-02 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08	Черная Нейлоновая крепёжная Лента	Нейлон	NA	Halco Products, Великобрита ния

6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-11 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 9. Ортез на локтевой сустав AM-LX-02 10. Ортез на локтевой сустав AM-SL-02 11. Ортез на локтевой сустав EB-L 12. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 13. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 14. Ортез на плечевой сустав OKG-02 15. Ортез на плечевой сустав AM-SOB 16. Ортез на плечевой сустав AS-B 17. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-04 18. Ортез на всю руку AM-SL-03				
1. Ортез большого пальца руки AM-D-01, 2. Ортез на пальцы AM-D-01 (детский) 3. Ортез на пальцы AM-SP-03 4. Ортез на кисть AM-OSN-U-12 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-LM 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-01 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-02 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 (детский) 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-11 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-08 15. Ортез на пальцы AM-D-04 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-13 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-10 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-12 21. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-02 22. Ортез на лучезапястный сустав AM-SN-01 23. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-09 24. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-01 25. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-02 26. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-07 27. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-13 28. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-09 29. Ортез на локтевой сустав AM-SL-02 30. Ортез на локтевой сустав AS-LA 31. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 32. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 (детский) 33. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R 34. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R (детский) 35. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-03 36. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-04 37. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07 38. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 39. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-03/AIR 40. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-14 41. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 42. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-B-03 43. Ортез на локтевой сустав OKG-22 44. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/1RE 45. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы FIX-KG-20 46. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы EB-L-01 47. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 48. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 49. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-04 50. Ортез на плечевой сустав AM-BX-01 51. Ортез на плечевой сустав AM-BX-03 52. Ортез на плечевой сустав AM-SOB 53. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 54. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-08 55. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03 56. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 57. Ортез на всю руку AM-SOB-01 58. Ортез на всю руку AM-SOB-07 59. Ортез на всю руку AM-SOB-07 (детский)	Ремни велкро	Полиамид	367227206-15	SGS Taiwan, Тайвань
1. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-LM 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-13 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 6. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-02 7. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-09 8. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-01 9. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-02 10. Ортез на локтевой сустав AM-SL 11. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 12. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 13. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы OKG-05 14. Ортез на всю руку AM-SOB-05 15. Ортез на пальцы AM-D-03 16. Ортез на пальцы AM-D-04 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-02 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N	Синтетическая пряжа(нити)	полиамид, полиэстер	1. 75 DR	ZWCh Stilon SA, Польша

19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N (детский) 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 (детский) 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-02 23. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-01 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-11 25. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-15 26. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-15 27. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-07 28. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-08 29. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-10 30. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-12 31. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-14 32. Ортез на лучезапястный сустав OKG-23 33. Ортез на лучезапястный сустав OKG-24 34. Ортез на лучезапястный сустав OKG-25 35. Ортез на лучезапястный сустав PCO-A-08 36. Ортез на локтевой сустав AM-LX-01 37. Ортез на локтевой сустав R4M-SL 38. Ортез на локтевой сустав R4M-SL-01 39. Ортез на локтевой сустав AS-L/A 40. Ортез на локтевой сустав EB-L 41. Ортез на локтевой сустав OKG-18 42. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-14 43. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-06 44. Ортез на локтевой сустав AS-L 45. Ортез на локтевой сустав U-SL 46. Ортез на локтевой сустав OKG-04 47. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 48. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 49. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 50. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 51. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 52. Ортез на лучезапястный сустав OKG-17 53. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-08				
1. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-12 4. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-09 5. Ортез на лучезапястный сустав OKG-20 6. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 7. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IR 8. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IRE 9. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 10. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 11. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 12. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-03/AIR 13. Ортез на локтевой и плечевой суставы MASTER-03 14. Ортез на всю руку AM-SOB-06 15. Ортез на всю руку MASTER-01 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-01 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-02 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-03 23. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-04 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-05 25. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-08 26. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 27. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-02 28. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-14 29. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-01 30. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-02 31. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-07 32. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-11 33. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-13 34. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-07 35. Ортез на локтевой сустав R4M-SL-01 36. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-09 37. Ортез на плечевой сустав FIX-KG-12	Трикотаж	Полиэстер	S-13/ 270	Janmar Sport, Польша
1. Ортез на пальцы AM-SP-01 2. Ортез на пальцы AM-SP-02 3. Ортез на пальцы AM-SP-03 4. Ортез на пальцы AM-SP-04 5. Ортез на пальцы AM-OSN-U-22 6. Ортез на пальцы FIX-KG-14 7. Ортез на кисть AM-OSN-U-12 8. Ортез на кисть 4ARMY-B-13 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-02 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав U-SN 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-01 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-10 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-11 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05	Неопреновая ткань	Неопрен	CP17- 069338 - SZ	SGS, Китай

20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-06 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-16 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-01 23. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-02 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-03 25. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-04 26. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-05 27. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-08 28. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-10 29. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-10 30. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-11 31. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-11 32. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-10 33. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 34. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-14 35. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 36. Ортез на лучезапястный сустав AM-DON-01 37. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-01 38. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-02 39. Ортез на лучезапястный сустав AM-SN-01 40. Ортез на лучезапястный сустав AS-N 41. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-13 42. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-14 43. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-10 44. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-01 45. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SN-02 46. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-20 47. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-07 48. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-11 49. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-13 50. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-07 51. Ортез на лучезапястный сустав OKG-24 52. Ортез на локтевой сустав AM-SL-02 53. Ортез на локтевой сустав AM-LX-01 54. Ортез на локтевой сустав MS-L-01 55. Ортез на локтевой сустав AS-L 56. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 57. Ортез на локтевой сустав AS-L-02 58. Ортез на локтевой сустав AS-L-F 59. Ортез на локтевой сустав AS-L-A 60. Ортез на локтевой сустав U-SL 61. Ортез на локтевой сустав OKG-04 62. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR (детский) 63. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-01 64. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-03 65. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-04 66. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-05 67. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-09 68. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-19 69. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-04 70. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07 71. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-14 72. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-06 73. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-07 74. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-08 75. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 76. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставам AM-KG-AM/IRE 77. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставам FIX-KG-20 78. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставам 4ARMY-SN-12 79. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставам 4ARMY-SL-02 80. Ортез на лучезапястный и локтевой суставам AM-OSN-U-17 81. Ортез на лучезапястный и локтевой суставам 4ARMY-SN-06 82. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 83. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 84. Ортез на плечевой сустав AM-BX-03 85. Ортез на плечевой сустав AM-SOB 86. Ортез на плечевой сустав AS-B 87. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-01 89. Ортез на плечевой сустав FIX-KG-12 90. Ортез на плечевой сустав TB-02 91. Ортез на плечевой сустав TB-03 92. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-03 93. Ортез на плечевой сустав OKG-21 94. Ортез на локтевой и плечевой суставам 4ARMY-B-04				
1. Ортез на пальцы AM-D-02, 2. Ортез на пальцы AM-D-02 (детский) 3. Ортез на пальцы AM-D-03 4. Ортез на пальцы AM-D-04 5. Ортез на пальцы AM-D-05 6. Ортез на пальцы AM-SP-01 7. Ортез на пальцы AM-SP-02 8. Ортез на пальцы AM-SP-04 9. Ортез на пальцы AM-OSN-U-22 10. Ортез на пальцы FIX-KG-14 11. Ортез на кисть 4ARMY-B-13 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав U-SN 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-11 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-01	Ворсованная ткань	Велюр	B10-2	Halco Europe LTD, Великобритания

19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-02 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-03 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-04 23. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-08 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 25. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-10 26. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 27. Ортез на лучезапястный сустав AM-DON-01 28. Ортез на лучезапястный сустав MS-N-01 29. Ортез на лучезапястный сустав AM-SN-01 30. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-13 31. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-20 32. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-07 33. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-11 34. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-B-09 35. Ортез на лучезапястный сустав OKG-23 35. Ортез на лучезапястный сустав OKG-25 36. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 37. Ортез на локтевой сустав AS-L 38. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 39. Ортез на локтевой сустав AM-SL-01/CCA 40. Ортез на локтевой сустав U-SL 41. Ортез на локтевой сустав OKG-04 42. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-09 43. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-19 44. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07 45. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-13 46. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-06 47. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-08 48. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IR 49. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IRE 50. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы FIX-KG-20 51. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-12 52. Ортез на плечевой сустав AM-BX-01 53. Ортез на плечевой сустав AM-BX-02 54. Ортез на плечевой сустав AM-KOB 55. Ортез на плечевой сустав AM-KOB (детский) 56. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 57. Ортез на плечевой сустав TB-02 58. Ортез на плечевой сустав TB-03 59. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 60. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-08 61. Ортез на плечевой сустав OKG-26 62. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 63. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-02 (детский) 64. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-04 65. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-05 66. Ортез на всю руку AM-SOB-05				
1. Ортез на пальцы AM-D-02 2. Ортез на пальцы AM-D-02 (детский) 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 4. Ортез на пальцы AM-D-05 5. Ортез на пальцы AM-SP-01 6. Ортез на пальцы FIX-KG-14 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-16 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-01 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-02 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-03 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-04 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-05 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-10 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-10 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-10 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-14 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 22. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-13 23. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-15 24. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-11 25. Ортез на локтевой сустав AM-LX-01 26. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 27. Ортез на локтевой сустав AS-L-01 28. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-19 29. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-13 30. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AM-OSN-U-17 31. Ортез на плечевой сустав AS-B 32. Ортез на плечевой сустав FIX-KG-12 33. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 34. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 35. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 36. Ортез на всю руку MASTER-01	Тканная лента(велькро)	Полиамид	25038-54-4	Halco Europe LTD, Великобритания

1. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N (детский) 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-01 (детский) 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-L.M 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-02 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-N-01 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-10 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-06 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-10 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-11 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 17. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-14 18. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-07 19. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-08 20. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-10 21. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-14 22. Ортез на лучезапястный сустав OKG-20 23. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 24. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 (детский) 25. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R 26. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/1R (детский) 27. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 28. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-12 29. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AM-OSN-U-17 30. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 31. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 32. Ортез на плечевой сустав MASTER-02 33. Ортез на плечевой сустав OKG-01 34. Ортез на плечевой сустав OKG-02 35. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 36. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-08 37. Ортез на плечевой сустав OKG-21 38. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR 39. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR 40. Ортез на всю руку AM-SOB-01 41. Ортез на всю руку MASTER-01	Ворсованная ткань	Полкамид	Welur PA 165g/m2	ZAKŁAD PRODUKCJI DZIEWIARSKIEJ WALDEMAR ROSŃSKI, Польша
1. Ортез большого пальца руки AM-D-01, 2. Ортез на палец AM-D-01 (детский) 3. Ортез на палец AM-D-02 4. Ортез на палец AM-D-02 (детский) 5. Ортез на палец AM-D-03 6. Ортез на палец AM-SP-01 7. Ортез на палец AM-SP-02 8. Ортез на палец AM-OSN-U-22 9. Ортез на палец FIX-KG-14 10. Ортез на кисть AM-OSN-U-12 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-L.M 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-01 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-02 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав EB-N-02 20. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 21. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 (детский) 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 23. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 24. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 25. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-01 26. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 27. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 28. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-08 29. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 30. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-10 31. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-11 32. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-06 33. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-16 34. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-05 35. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-11 36. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-13 37. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-13 38. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SL-15 39. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 40. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-10 41. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-11 42. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-12 43. Ортез на кисть и лучезапястный сустав OKG-19 44. Ортез на лучезапястный сустав AM-DON-01 45. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-U-15 46. Ортез на лучезапястный сустав AM-OSN-L-09 47. Ортез на лучезапястный сустав 4ARMY-SL-12 48. Ортез на лучезапястный сустав OKG-24 49. Ортез на лучезапястный сустав OKG-20 50. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 51. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01	Шины вставки	Алюминиевый сплав	424005.21	Josef Pauer - METAL TRADE, Чехия

52. Ортез на локтевой сустав AM-TL-01 (детский) 53. Ортез на локтевой сустав OKG-04 54. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-19 55. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07 56. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 57. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IR 58. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IRE 59. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы FIX-KG-20 60. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-12 61. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AM-OSN-U-17 62. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 63. Ортез на плечевой сустав AM-BX-01 64. Ортез на плечевой сустав AM-BX-03 65. Ортез на плечевой сустав OKG-02 66. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 67. Ортез на плечевой сустав TB-02 68. Ортез на плечевой сустав TB-03 69. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 70. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-15 71. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-08 72. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы OKG-05 73. Ортез на всю руку AM-SL-03 74. Ортез на всю руку MASTER-01				
1. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-11 3. Ортез на локтевой сустав AM-SL-02 4. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 5. Ортез на локтевой сустав AM-SL-01/CCA 6. Ортез на локтевой сустав AS-L/A 7. Ортез на локтевой сустав OKG-04 8. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR 9. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR (детский) 10. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-09 11. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-14 12. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 13. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG 14. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-SN-05 15. Ортез на плечевой сустав 4ARMY-B-06 16. Ортез на плечевой сустав AM-SOB-03/AIR 17. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 18. Ортез на локтевой и плечевой суставы AM-SOB-03 (детский) 19. Ортез на локтевой и плечевой суставы 4ARMY-B-04	Шины вставки	Сталь (FE)	ST 34	RUR-DAN Marian Misztal, Польша
1. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR 2. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/IR 3. Ортез на всю руку AM-SL-03	Вставки , ортез	Углепластик(К арбон)	NA	Coats American Inc., США
1. Ортез на пальцы AM-D-05 2. Ортез на кисть AM-OSN-U-12 3. Ортез на кисть 4ARMY-B-13 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-03 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-03 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-04 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-04 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-05 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AS-NX-02 10. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 11. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01 (детский) 12. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-02 13. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-01 14. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-02 15. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-06 16. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-07 17. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 18. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-02 19. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-B-14 20. Ортез на лучезапястный сустав OKG-23 22. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-02 Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SN-02 23. Ортез на локтевой сустав AS-L/A 24. Ортез на локтевой сустав EB-L 25. Ортез на локтевой сустав AM-KG-AR/IR 26. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SL-09 27. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-B-03 28. Ортез на локтевой сустав OKG-22 29. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы EB-L-01 30. Ортез на плечевой сустав OKG-01	Шины вставки	Пластик	DURACON M90	Polyplastics Co., Ltd., Япония
1. Ортез на пальцы APARAT STACKA 2. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-SDP-K-02 3. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-U-01/CCA 4. Ортез на кисть и лучезапястный сустав AM-OSN-L-05 5. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-05 6. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-06 7. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-08 8. Ортез на кисть и лучезапястный сустав FIX-KG-10 9. Ортез на кисть и лучезапястный сустав 4ARMY-SN-10 10. Ортез на лучезапястный сустав FIX-KG-07 11. Ортез на локтевой сустав MS-L-02 12. Ортез на локтевой сустав AM-SL-01/CCA 13. Ортез на локтевой сустав AS-L/F 14. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-09 15. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-07	Шины вставки	Пластик	ABS	ZiNTH Elektromaschi nenbau GmbH, Германия

16. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SN-14 17. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SI-08 18. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы AM-KG-AM/1R 19. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы FIX-KG-20 20. Ортез на кисть, лучезапястный и локтевой суставы 4ARMY-SN-12 21. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-01 22. Ортез на плечевой сустав AM-AO-KG-02 23. Ортез на плечевой сустав MASTER-04 24. Ортез на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы OKG-05 25. Ортез на всю руку MASTER-01				
1. Ортез на локтевой сустав AM-LX-01 2. Ортез на локтевой сустав AS-L 3. Ортез на локтевой сустав AM-SI. 4. Ортез на локтевой сустав AM-SI-01-CCA 5. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SI-03 6. Ортез на локтевой сустав 4ARMY-SI-04 7. Ортез на локтевой сустав FIX-KG-19 8. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AS-PL 9. Ортез на плечевой сустав AM-BX-03 10. Ортез на лучезапястный и локтевой суставы AS-PL 11. Ортез на плечевой сустав TB-02 12. Ортез на плечевой сустав TB-03	Силиконовые вставки, подушечки	Силикон	A14-16	Fresco, Испания

Комплект поставки медицинского изделия

Наименование	Количество
Ортез верхней конечности "REN4MAT" (одного варианта исполнения и типоразмера)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Способ применения

Продолжительность ежедневного ношения изделия, а также общий срок его использования

Устанавливаются врачом.

- Первичная примерка и подгонка изделия должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Проинструктируйте пациента о правилах обращения с изделием и ухода за ним.
- Обратите внимание пациента на то, что он должен незамедлительно обратиться к врачу при появлении каких-либо необычных изменений (например, новых жалоб).

APARAT STACKA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


AM-D-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения, указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

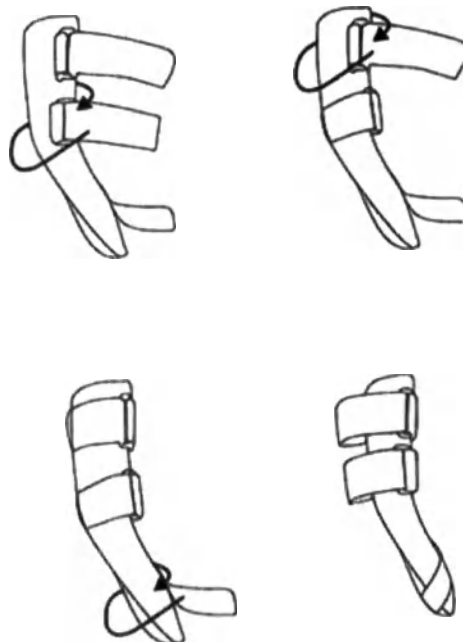

AM-D-01 (детский)





 рисунке ниже

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения, указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на

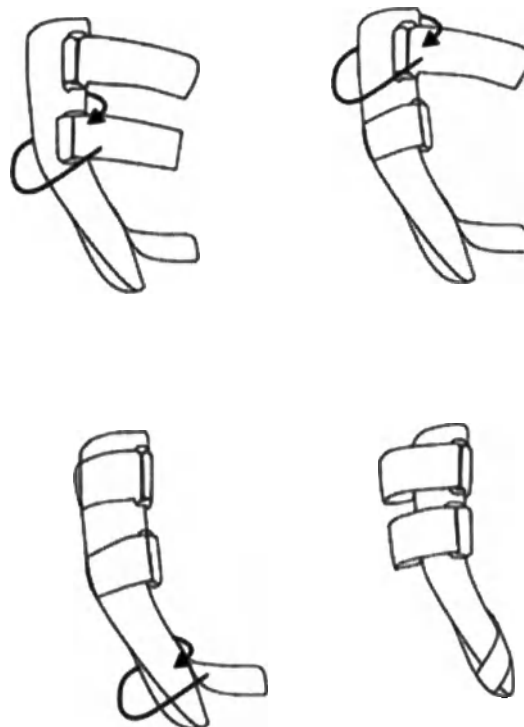


AM-D-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения, указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

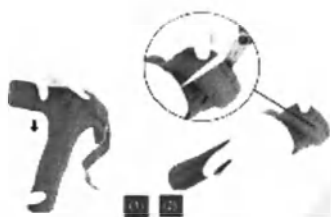

1. RU: наденьте ортез на палец (1) и проверьте длину запястья (2). При необходимости отрежьте




2. RU: оплетите ремень в соответствии с указанным направлением.

3. RU: проденьте ремень через пряжку и застегните липучку.



4. RU: прикрепите ленту к ортезу (1), оплетите палец в указанном направлении и закрепите липучку (2).

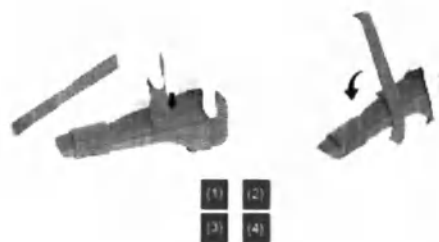

5. RU: закрепите ленту в пястной области (1), оплетите в указанном направлении (2 и 3) и закрепите липучку (4).



6. RU: готовое изделие.

AM-D-02 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



1. RU: наденьте ортез на палец (1) и проверьте длину запястья (2). При необходимости отрежьте



2. RU: оплетите ремень в соответствии с указанным направлением.

3. RU: проденьте ремень через пряжку и застегните липучку.



4. RU: прикрепите ленту к ортезу (1), оплетите палец в указанном направлении и закрепите липучку (2).



5. RU: закрепите ленту в пястной области (1), оплетите в указанном направлении (2 и 3) и закрепите липучку (4).



6. RU: готовое изделие.


AM-D-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

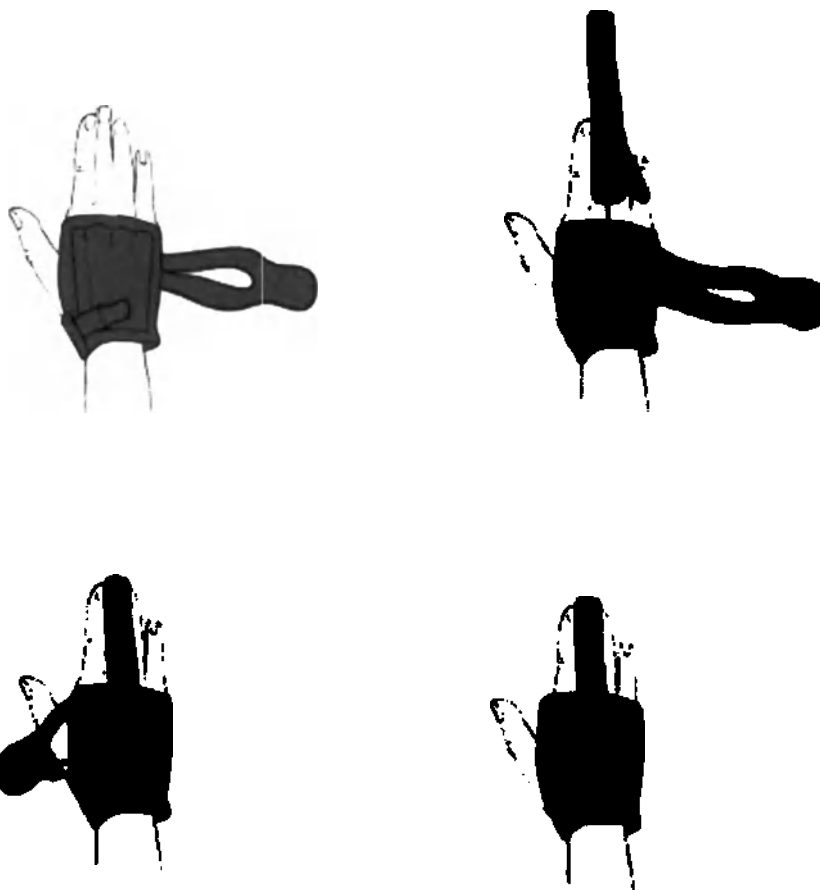


AM-D-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

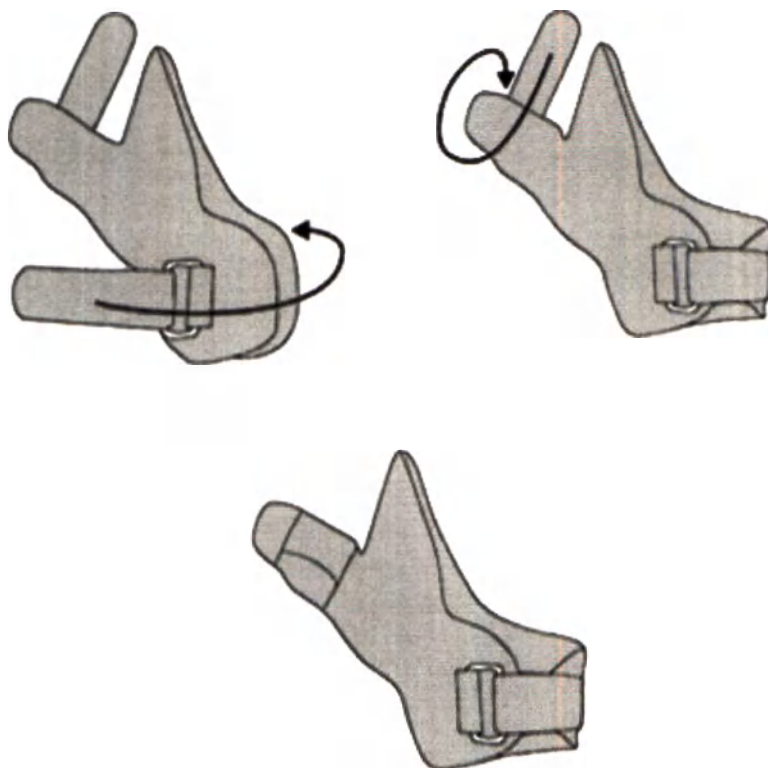

AM-D-05




ниже

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке

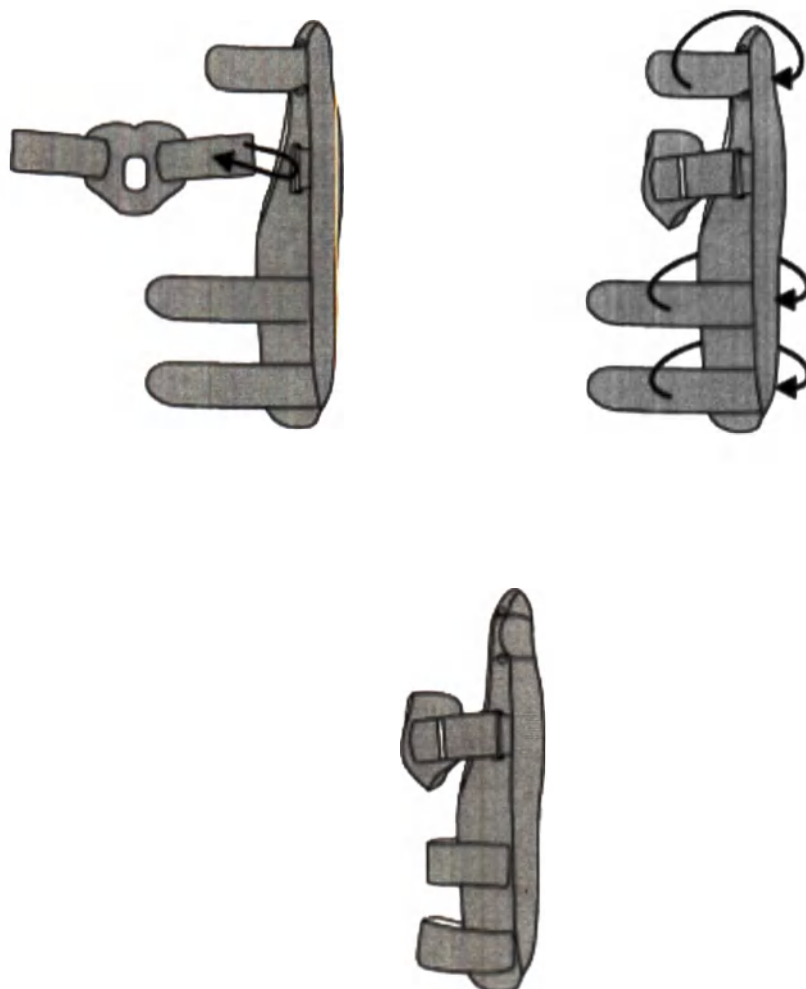

AM-SP-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

а) Способ наложения ортеза на боксерский перелом

1) Оберните самый короткий ремень ортеза вокруг маленького и безымянного пальца. Убедитесь, что профиль шины соответствует изгибам пястного сустава и запястья.



2) Пристегните средний ремень.

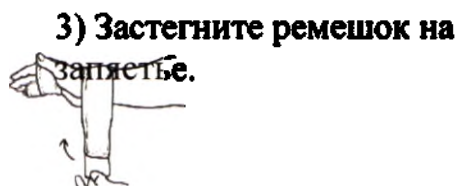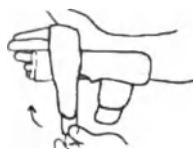

3) Застегните ремешок на запястье.

4) Правильно установлен ортез.



ПОДГОНКА

5) Вариант А: если есть давление на отросток локтевой кости, вы можете отрегулировать тыльную сторону ортеза. См. пункт 6.



6) Вариант В: указательным пальцем и большим пальцем держите тыльный элемент прямо над отростком локтевой кости. Выровняйте шину с отростком, чтобы уменьшить давление.



7) Правильно установлен и подогнан ортез



б) Способ установки ортеза на указательный и средний палец

1) оберните самый короткий ремешок ортеза вокруг указательного и среднего пальца.



2) закрепите средний ремень



- 3) закрепите ремень на запястье.




- 4) правильно установлен ортез



с) Как надеть ортез на безымянный и средний пальцы

- 1) Установите ортез, вставив мизинец через отверстие. Закрепите средний и безымянный пальцы.

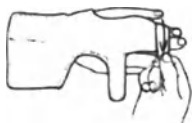

- 2) Закрепите средний ремень



- 3) Закрепите ремень на запястье.



- 4) Правильно установлен ортез



AM-SP-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.
Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

1)

Выберите тип жесткости.



3)

Застегнуть липучку (2)



2)

Наденьте ортез на руку




4)

Обведите вокруг пальца ремешок по периметру и закрепите липучку.



3) Застегнуть липучку (1)

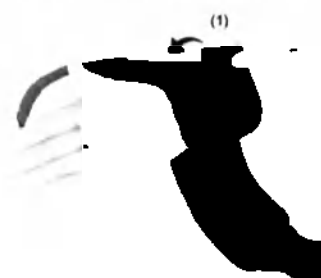

5)

Изделие готово




AM-SP-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

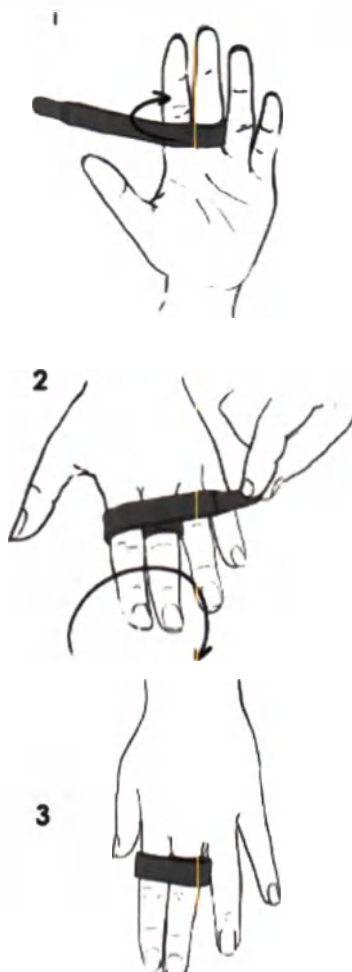


AM-SP-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

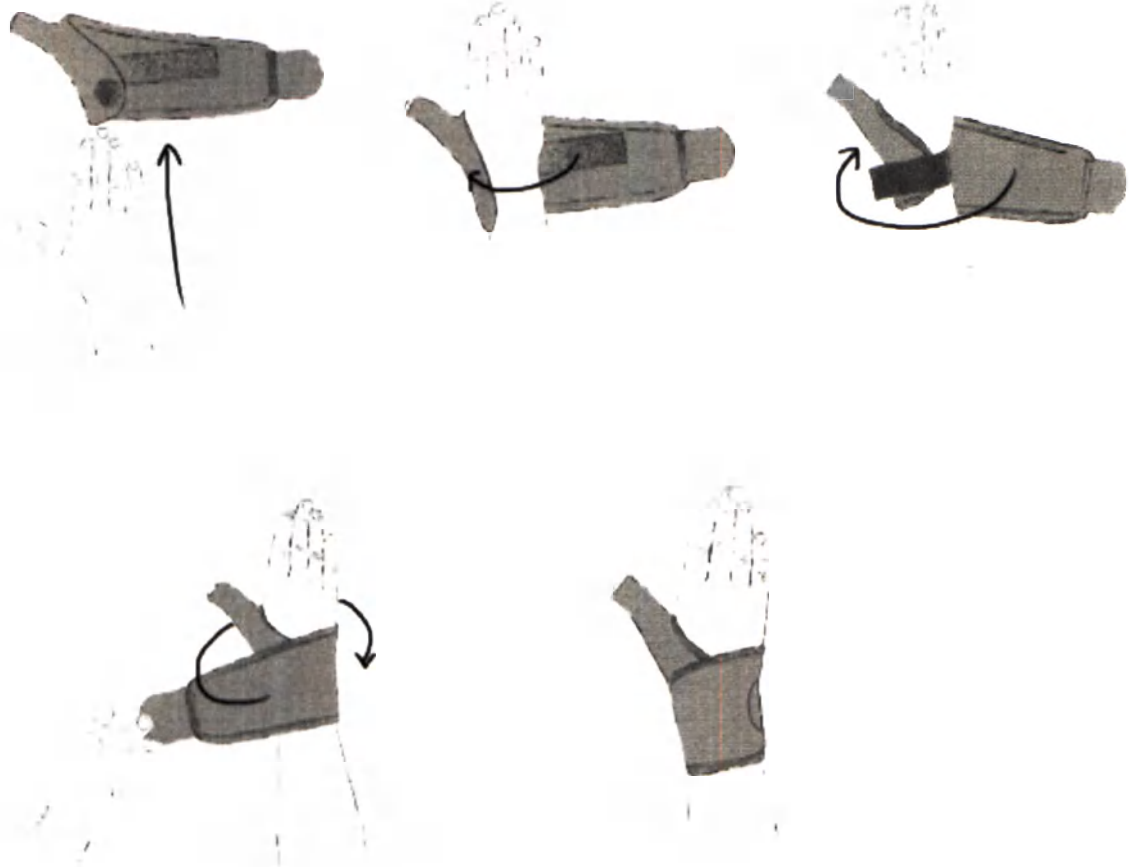

AM-SP-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

- 1)
Поместите большой палец и самый маленький палец в ортез.



- 2)
Застегните липучку (1).



- 3)
Застегните липучку (2).



- 4)
Застегните липучку (3).



- 5)
Обратите внимание на перекрестную застежку находится ли она в нужном месте



- 6)
Готовое изделие.



AM-OSN-U-22



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.


Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

- 1)
Наденьте ортез на руку.



- 2)
Оплетите запястье в указанном направлении и застегните липучку (1)

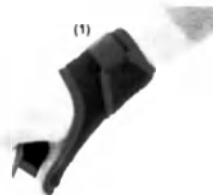

- 3)
Застегнуть обводную липучку
большого пальца (2)
- 4)
Готовое изделие.



FIX-KG-14



рисунках ниже.

Не следует надевать ортез на ночь.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПАЛЬЦЕВ II-III

- 1) Поместите большой палец в ортез



- 2) Оберните самый короткий ремень ортеза вокруг указательного и среднего пальцев, если вы не можете сформировать шину по мере необходимости. Застегните липучку (1).



- 3) Пристегните средний ремень (2).



- 4) Закрепите ремешок на запястье (3).



- 5) Готовое изделие



ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПАЛЬЦЕВ III-IV

- 1) Примените ортопедию, вставив мизинец через отверстие.



- 2) Закрепите средний и безымянный пальцы, если вы не можете сформировать шину по мере необходимости. Застегните липучку (1).



- 3) Пристегните средний ремень (2).



- 4) Закрепите ремешок на запястье (3).




- 5) Готовое изделие




ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПАЛЬЦЕВ IV-V


- 1) Оберните самый короткий ремень ортеза вокруг маленького и безымянного пальца. Убедитесь, что профиль шины соответствует изгибам пястной кости и запястья, если вы не можете сформировать шину по мере необходимости. Застегните липучку (1).

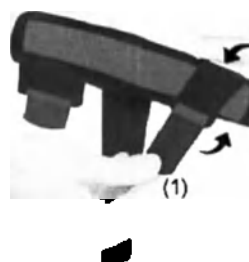

- 2) Пристегните средний ремень (2).

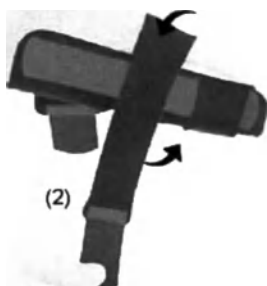

- 3) Закрепите ремешок на запястье (3).

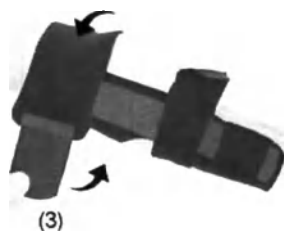

4) Готовое изделие




AM-OSN-U-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

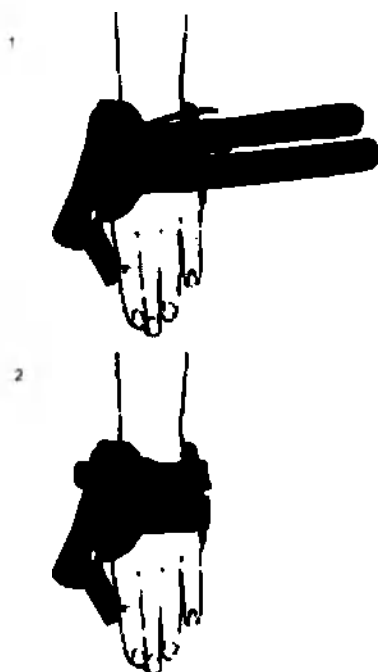

4ARMY-B-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.




AS-N-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

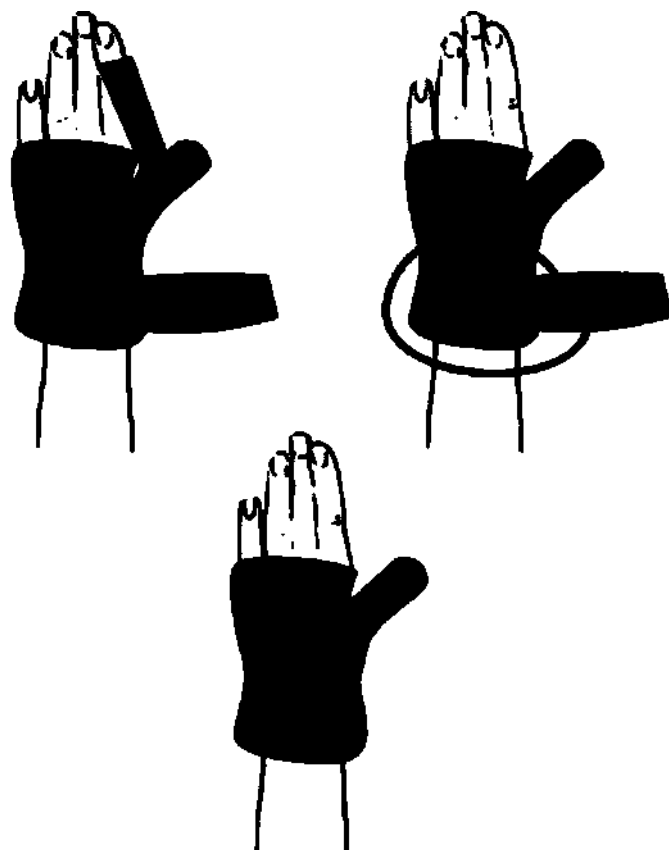


AM-OSN-U-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

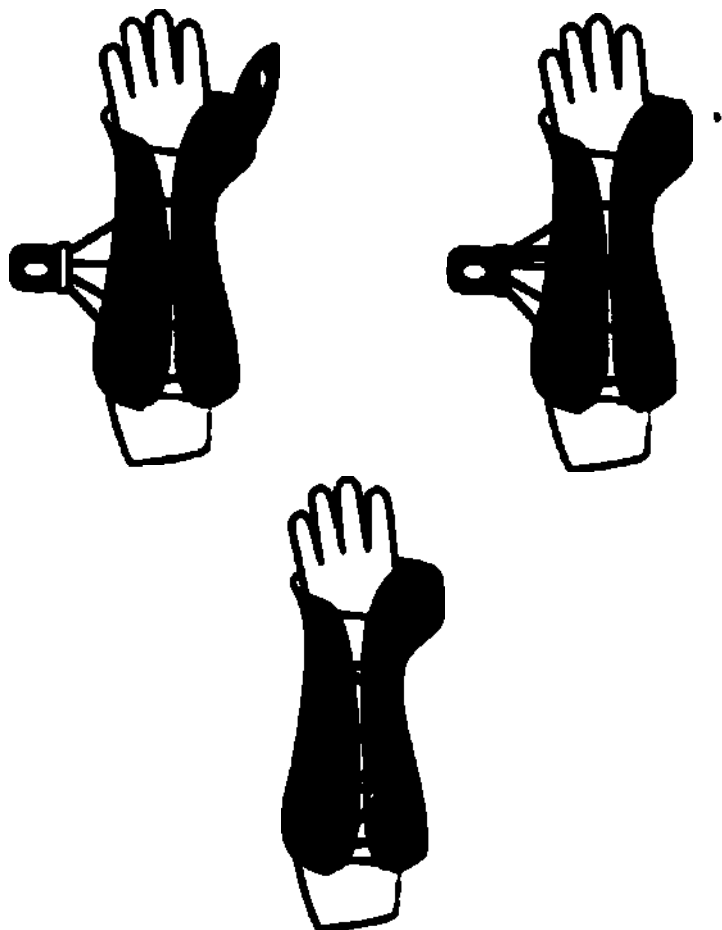

AM-OSN-L-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

Поместите руку на ортез, где проходит шина ладони.



Наденьте ортез на руку



Застегните липучку (1).



Застегните липучку большого пальца (2).



Готовое изделие.



AM-OSN-L-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

Поместите руку на ортез, где проходит шина ладони.



Наденьте ортез на руку.



Застегните липучку (1 и 2)



Застегните липучку большого пальца (3)



Готовое изделие.




AM-OSN-U-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

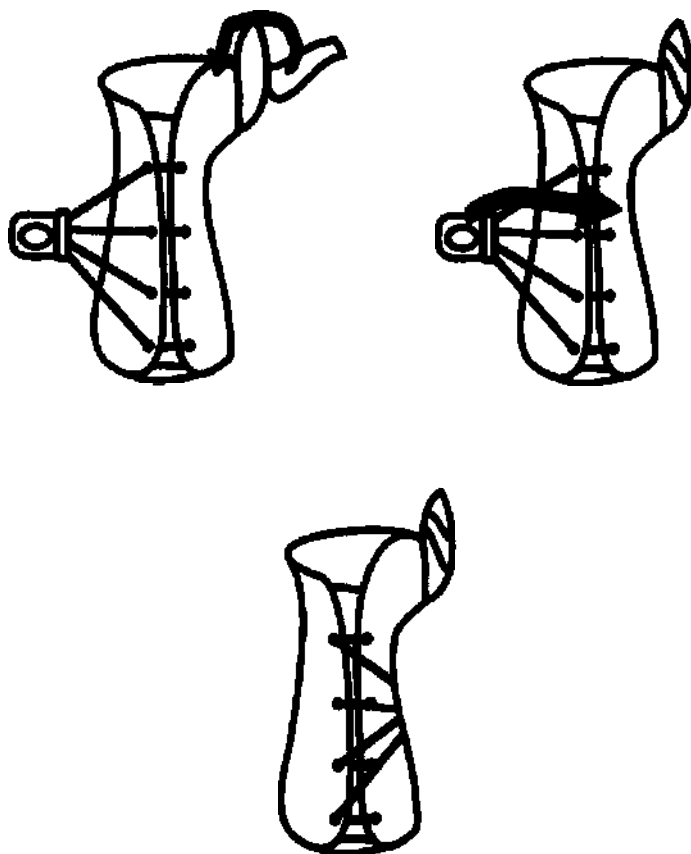

AM-OSN-U-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.


Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже.

1) Наденьте ортез на руку.



2) Проденьте ремни через пряжки и закрепите их на липучках в указанном порядке (1,2,3,4,).

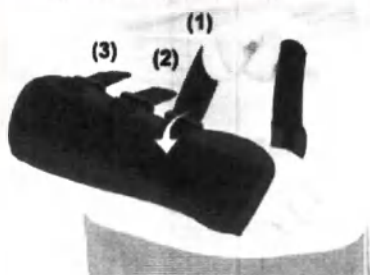

3) Готовое изделие.



AM-SN-LM



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.


Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунках ниже


Наденьте ортез на руку.



Проденьте ремень через плечо и закрепите карабин.

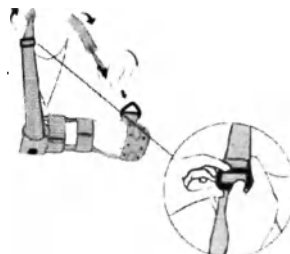

Закрепите периферийные ленты предплечья (1 и 2) и защита пальцев (3).

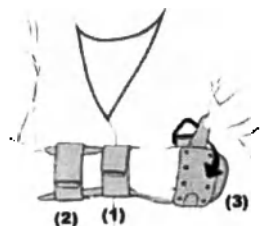


Установите подходящую длину плечевого ремня



С помощью ключа установите соответствующее положение руки.



Готовое изделие.

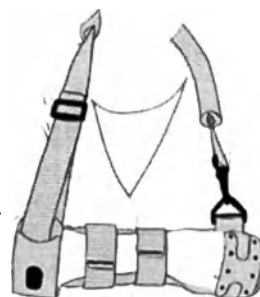


AM-SN-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

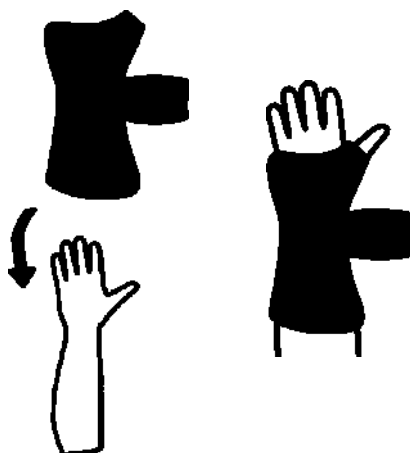

AS-NX-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AS-NX-02




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.


Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



1) Наденьте скобу на руку.

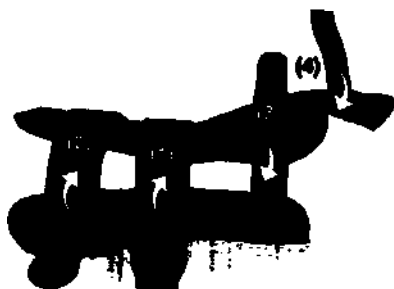

2) Проденьте ремни через пряжки и закрепите на липучке по указанному порядку (1,2,3,4).

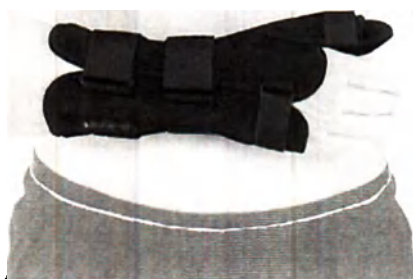

3) Готовое изделие.

ЕВ-N



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

- 1)
- 2)

Наденьте ортез на руку.
Застегнуть липучку (1)



3)
направлении.




Закрепите в указанном



4)
5)



Застегнуть липучку (2)
Готовое изделие.

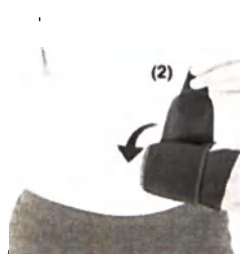


ЕВ-N (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

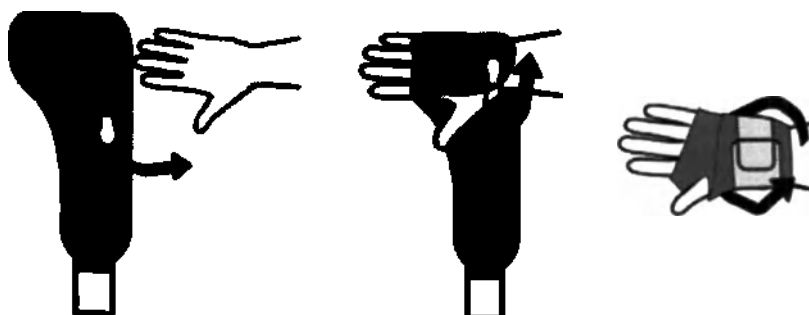

ЕВ-N-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

1)

Наденьте ортез на руку



2)

Застегнуть липучку (1)

3)

Застегнуть липучку (2)



4)

5)



(2)



(3)



Застегнуть липучку (3)
Готовое изделие.

ЕВ-N-01 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



ЕВ-N-02

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

- 1) Поместите большой палец в отверстие для большого пальца
- 2) Застегнуть липучку (1)



- 3) Оплетите запястье в указанном направлении и застегните липучку (2).
- 4) Готовое изделие



AM-OSN-U-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.


Вытяните ремни из пряжек и развернуть ортез



Наденьте ортез на руку.



Проденьте ремни через пряжки и закрепите их на липучках в соответствии с указанным порядком

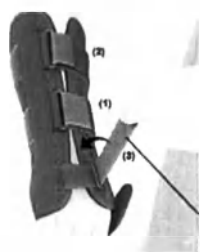

1) астегнуть липучку (4)



2) обрежьте лишнюю длину полосы



3) готовое изделие



AM-OSN-U-01 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

© 2015 ЦИРМИ
Всё права защищены

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

AM-OSN-U-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

- 1) возьмите металлическую шину и сформируйте по терапевтическим показаниям



- 2) возьмите ремни из пряжек и разверните ортез


- 3) поместите большой палец в ортез.



- 4) проденьте ремни через пряжки и застегните липучку по указанного порядка.

С

- 5) обрежьте лишнюю длину полосы

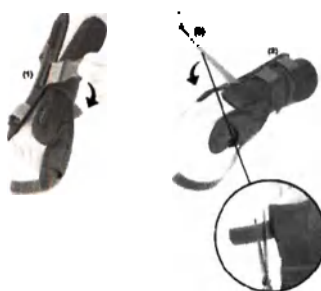

- 6) закрепите обводную липучку большого пальца (4).



- 7)
готовое изделие.



AM-OSN-L-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

- 1)
наденьте ортез на руку



- 2)
акрепите обводные ленты
предплечья (1 и 2) и запястья
(3 и 4)



- 3)
застегните защитный кожух (5)



- 4)
помощью шестигранного
ключа установите правильное
положение руки установите
подходящую длину плечевого
ремня
- 5)
прикрепите ремень к ортезу.
Проденьте ремень через плечо
и закрепите карабин

3



6)

отовое изделие.



Г



AM-OSN-L-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку.



Закрепите периферийные ленты предплечья (1 и 2) и запястье (3).

Закрепите кольцевую ленту большого пальца (4).



Застегните защитный кожух (5)



С помощью шестигранного ключа установите правильное положение руки, установите подходящую длину плечевого ремня.



Прикрепите ремень к ортезу. Проденьте ремень через плечо и закрепите карабин



Готовое изделие




AM-SDP-K-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

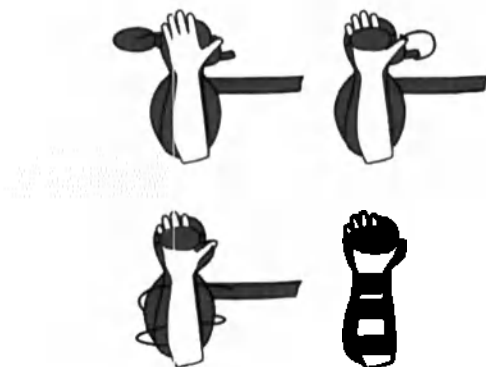


AM-SDP-K-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

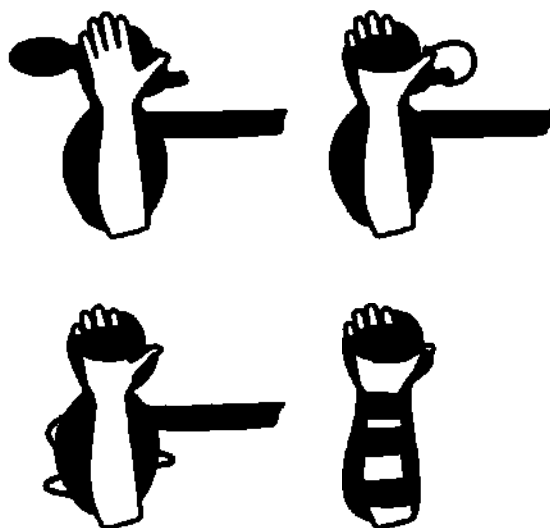


AS-N-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

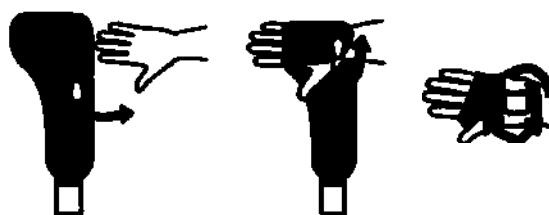

AM-OSN-U-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSN-U-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.




Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

AM-OSN-U-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

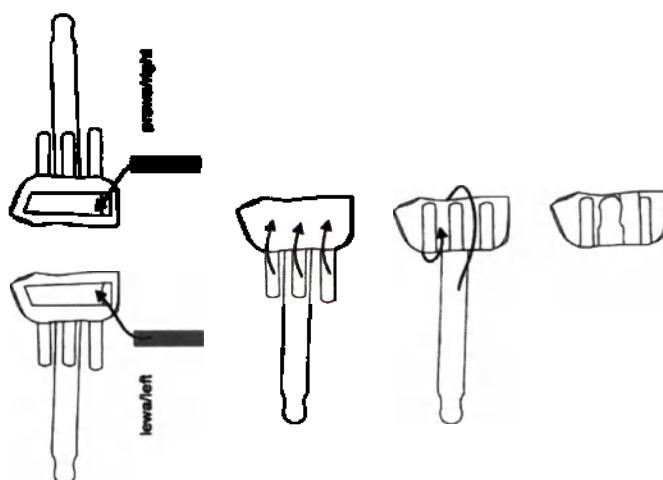

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

AM-OSN-U-01/CCA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSN-U-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.


изделию.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



Поместите руку на ортез, где проходит шина ладони, и застегните липучку (1)

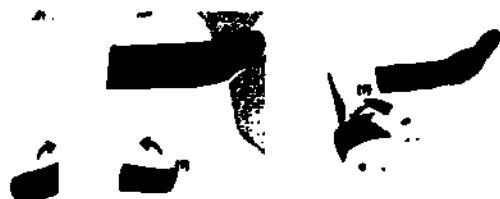

Застегните липучку на предплечье (2)



Закрепите дополнительный ремень в указанном месте и застегните липучку (3)



Готовое изделие.



AM-OSN-U-11



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSN-L-05




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку

Закрепите обводные ленты предплечья (1 и 2) и пальцев (3)

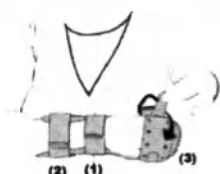

Готовое изделие



AM-OSN-L-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-OSN-U-16



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

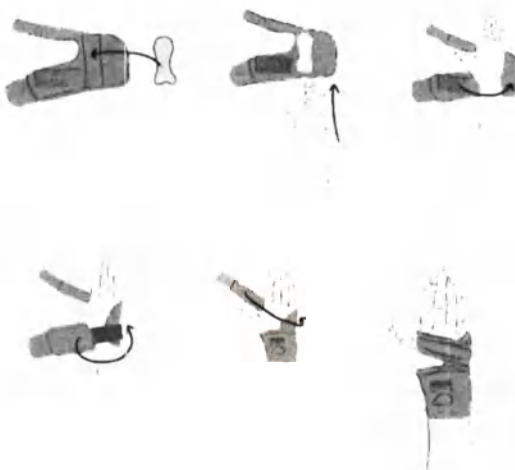

FIX-KG-01



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Поместите большой палец в ортез и закрепите в указанном направлении.



Застегните липучку

Готовое изделие



FIX-KG-02



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Поместите большой палец в ортез и закрепите в указанном направлении.



Застегните липучку

Готовое изделие



FIX-KG-03



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Наливаем горячую воду в емкость

Расстегиваем ремни и липучки ортеза

Помещаем массаж ортез в кипящую воду и ждем около минуты

Когда пластина размягчается, мы высушиваем ортез полотенцем

Проверяем, не слишком ли жарко. Если вы ждете, пока он слегка остынет.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Расстегиваем ремни и липучки ортеза.

Мы помещаем ортез в микроволновую печь и устанавливаем макс. мощность 800-1000 Вт.

Нагреваем ортез 10 секунд циклами каждый раз, когда проверяем, размягчается ли ортез, и меняем его положение. В зависимости от мощности данной плиты мы используем от нескольких до десятка циклов.

Проверяем, не слишком ли жарко. Если вы ждете, пока он слегка остынет

ДУХОВКА, МУЛЬТИВАР ИЛИ ДРУГИЕ.

Отстегиваем ремни и липучки: вставляем ортез в прибор, устанавливаем температуру на 150°.

Нагреваем 5 минут

Проверяем, мягкая ли пластинка. Если она еще жесткая, нагреваем ее еще. Если она слишком горячая, ждем, пока она слегка остынет.

КАК ОДЕВАТЬ



- 1) Поместите большой палец в ортез и закрепите в указанном направлении
- 2) Застегните липучку
- 3) Готовое изделие.



FIX-KG-04



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Поместите большой палец в ортез и закрепите в указанном направлении



Застегните липучку

Готовое изделие.



FIX-KG-05




Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Поместите большой палец в ортез

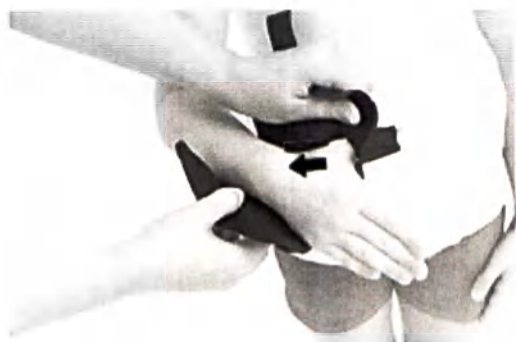

Застегните липучку в указанном направлении (1)



Застегните липучку (2 и 3).



Готовое изделие.



FIX-KG-06



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Поместите большой палец в ортез



Застегните липучку в указанном направлении (1)



Застегните липучку (2 и 3).



Готовое изделие.



FIX-KG-08



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Поместите большой палец в ортез



Застегните липучку в указанном направлении (1)



Застегните липучку (2 и 3).



Готовое изделие.



FIX-KG-10



Ортез не следует одевать на ночь. Ортез должен быть подобран лечащим врачом, квалифицированным поставщиком или

Реабилитантом.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.


Наденьте ортез на руку и переплетите ленту вокруг запястья

Застегните липучку (1).



Обведите поясок вокруг большого пальца.

Застегнуть липучку (2)

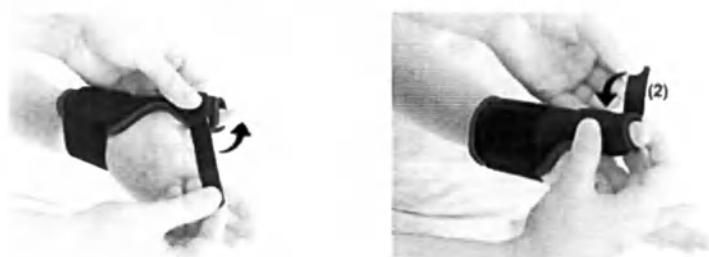

Готовое изделие.




4ARMY-SN-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

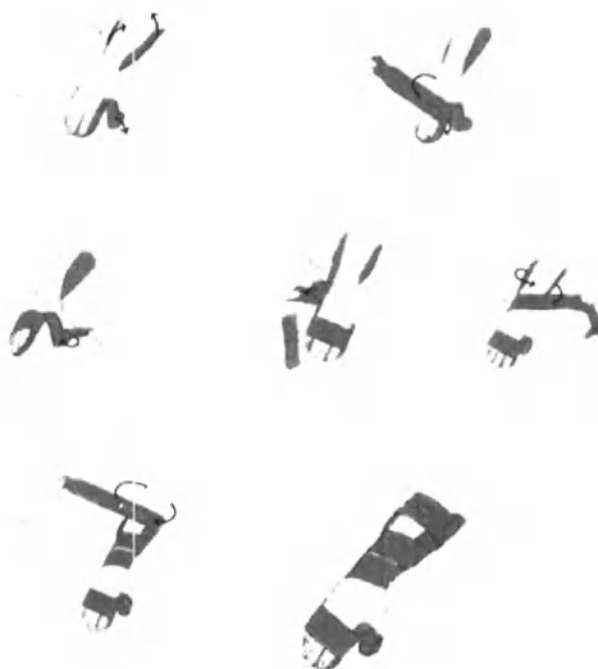

4ARMY-SN-11




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку

Закрепите обводные ленты предплечья (1 и 2) и пальцев (3)

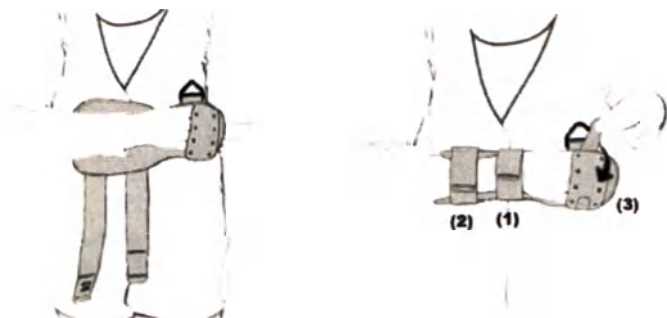

Готовое изделие



4ARMY-SL-11




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

4ARMY-SL-13

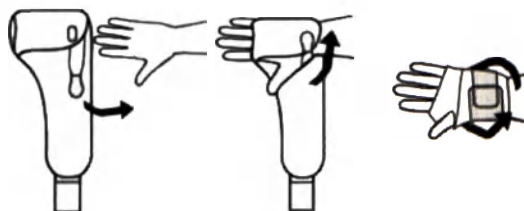



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку.



Застегнуть липучку (1)

Застегнуть липучку (2)

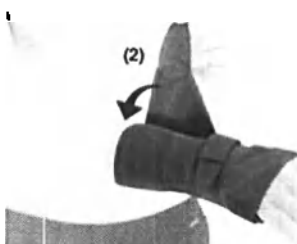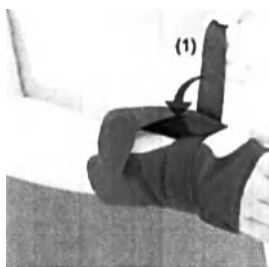

Застегните липучку (3).

Готовое изделие.





Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку.



Застегнуть липучку (1)

Застегнуть липучку (2)



Застегните липучку (3).

Готовое изделие.



4ARMY-B-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку.

Застегните липучку (1).



Закрепите ленту в указанном направлении.

Застегнуть липучку (2)



Готовое изделие.




4ARMY-B-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

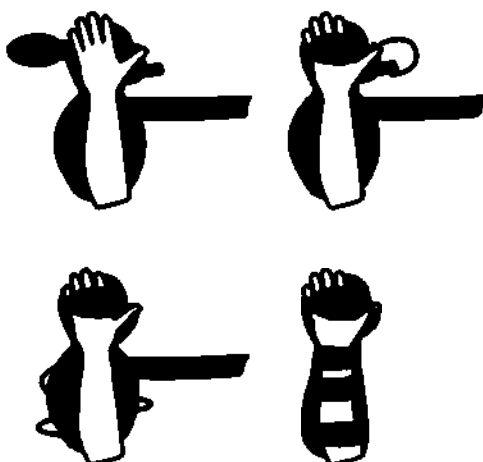


4ARMY-B-11



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

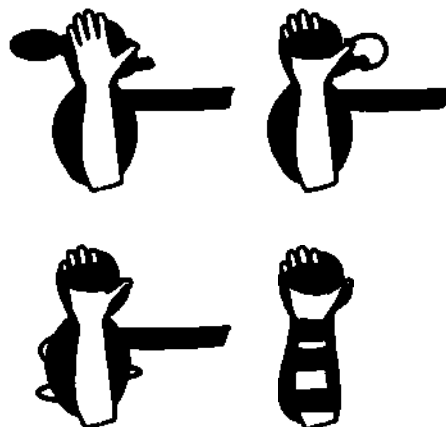

4ARMY-B-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




4ARMY-B-14



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

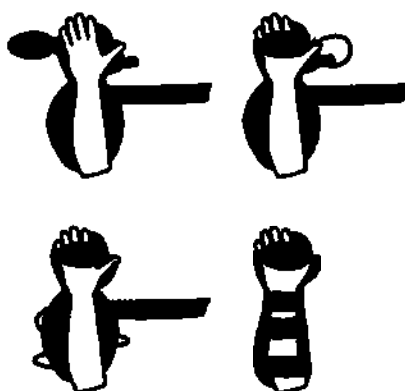

OKG-19




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

пальцев.

С помощью этого ортеза можно обездвижить от одного до четырех

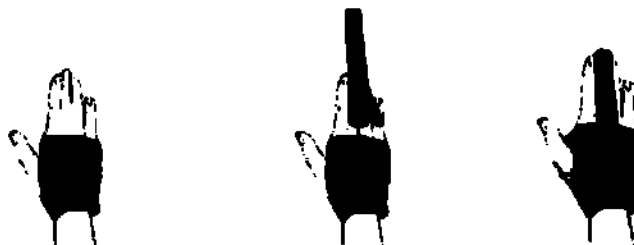

AM-DON-01




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку и отрегулируйте жесткую вставку.

Закрепите ортез липучками (1 и 2) в такой способ, чтобы застежка проходила вдоль жесткой вставки.

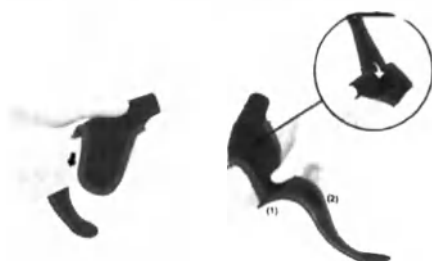

Обведите поясок вокруг большого пальца и застегни липучку.

Изделие готово.




MS-N-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

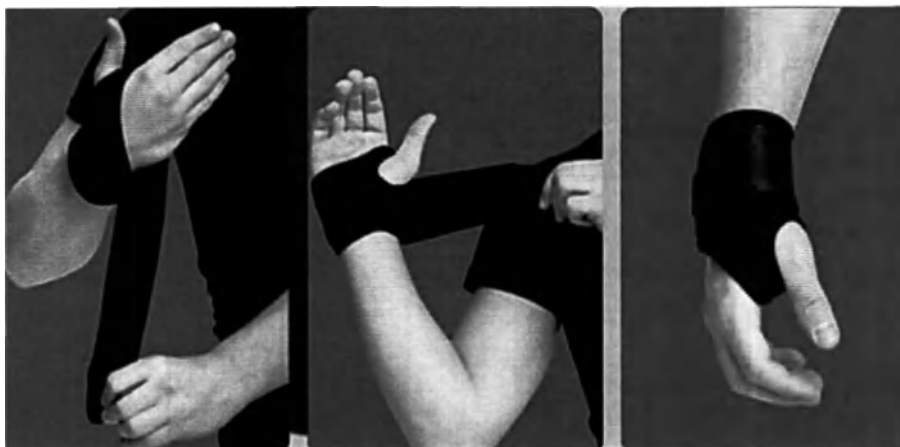

MS-N-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

AM-SN-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AS-N



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-OSN-U-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

ортез для запястья (1), ободок на большой палец (2).

оденьте ортез на руку



застегнуть липучку (1)

застегнуть липучку (2)



оденьте повязку на большой палец и прикрепите к запястью.



готовое изделие.



Внимание!

1. Чем дальше закреплена повязка на палец

к запястью тем сильнее будет отведение большого пальца.

2. Однажды прикреплена и отведена повязка большого пальца не требует повторного прикрепления.



AM-OSN-U-14




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

ЭЛЕМЕНТЫ ОРТЕЗА

1. Пелота со съемным центром.
2. Колено поддержки.
3. Компрессионный резиновый ремень.

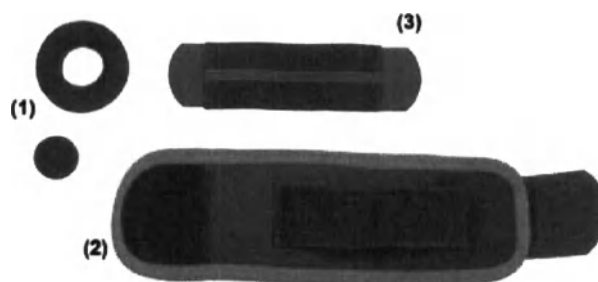

AM-OSN-U-15



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на руку.



Застегнуть липучку (1)

Застегнуть липучку (2)

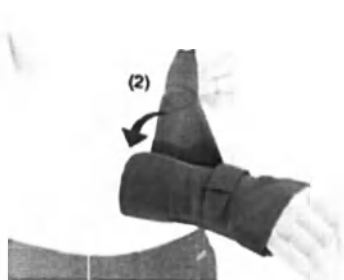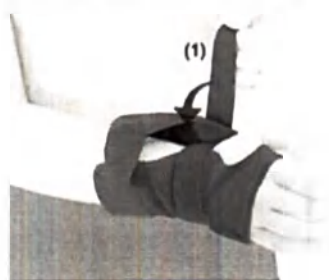

Застегните липучку (3).

Готовое изделие.




AM-OSN-L-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

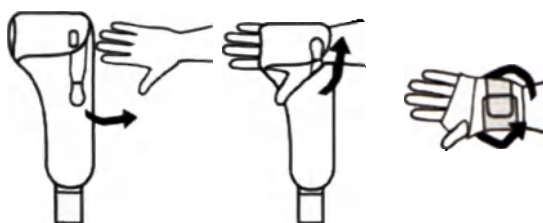


AM-OSN-L-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.

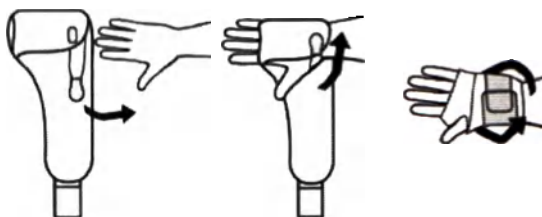

AM-OSN-L-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-OSN-L-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

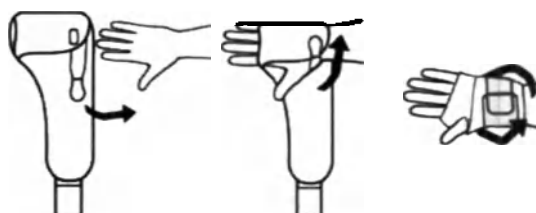

4ARMY-SN-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SN-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-OSN-U-20




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

Поместите большой палец в отверстие ортеза

Оплетите запястье в указанном направлении

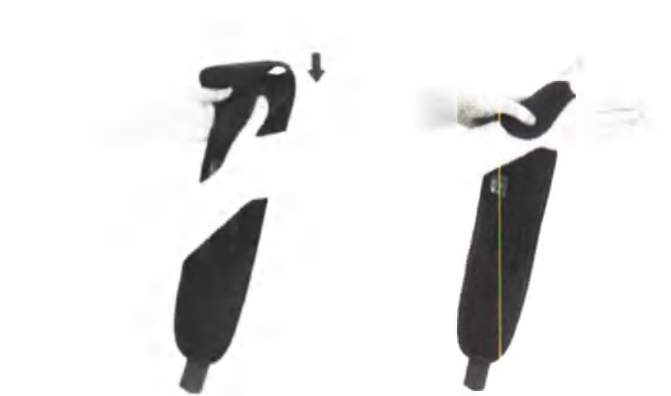

Оплетите запястье в указанном направлении

Оплетите запястье в указанном направлении



Застегните липучку

Готовое изделие.



FIX-KG-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

FIX-KG-11



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на руку и застегните липучку (1).



Проложите круговой пояс вокруг запястья

Застегните липучку (2).



Готовое изделие.

FIX-KG-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на руку

Застегните липучку



Проденьте ремень через пряжку и закрепите на липучке.



Готовое изделие.

OKG-17



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на руку и подтяните вверх



Готовое изделие.

4ARMY-SL-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SL-14



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-B-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-B-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



OKG-23



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



OKG-24



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



OKG-25



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




PCO-A-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

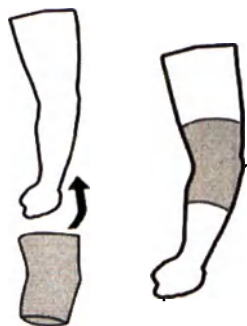

OKG-20



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



AM-LX-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-SL-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

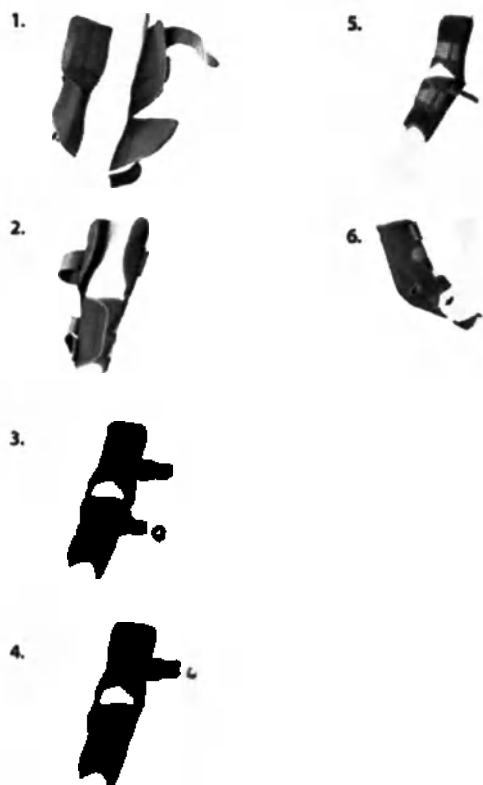


AM-LX-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

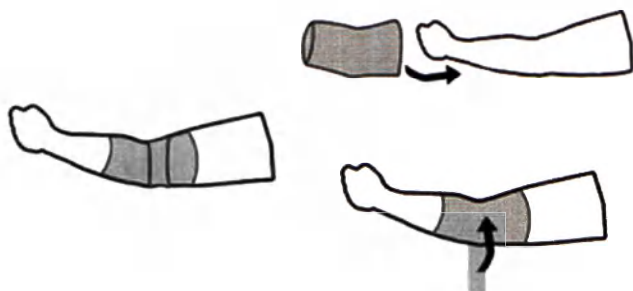


MS-L-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

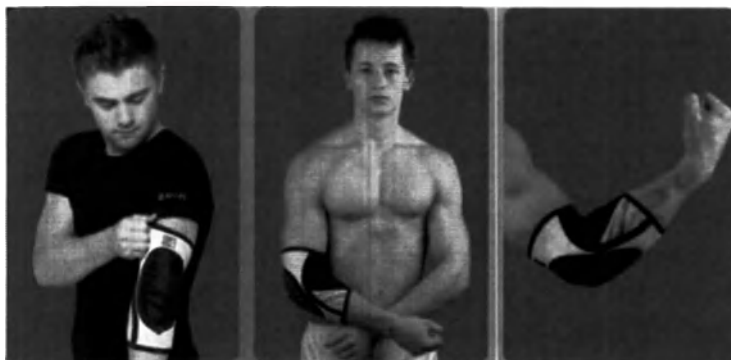


MS-L-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

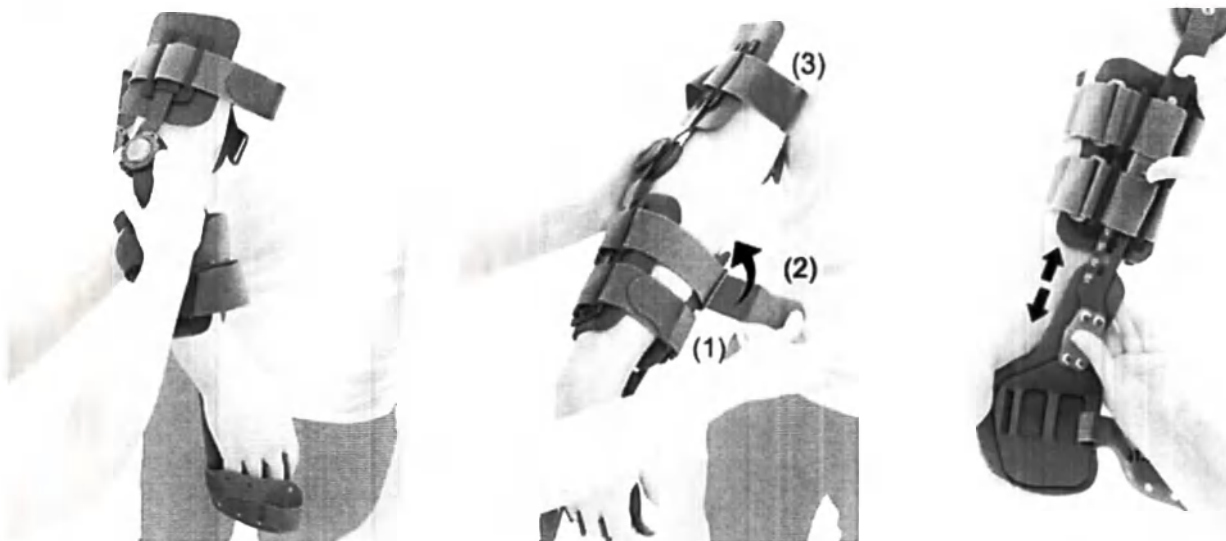

- 1). Наденьте ортез на руку таким образом, чтобы механизмы шин располагались на боковом надмыщелке плечевой кости.
- 2). Застегните липучку по указанному порядку (1,2,3)
- 3). Установите соответствующую длину ложки ладони.



4). С помощью ключа установите правильное положение руки.

5). Закрепите защитный кожух пальцев.



6). Готовое изделие.

R4M-SL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




R4M-SL-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

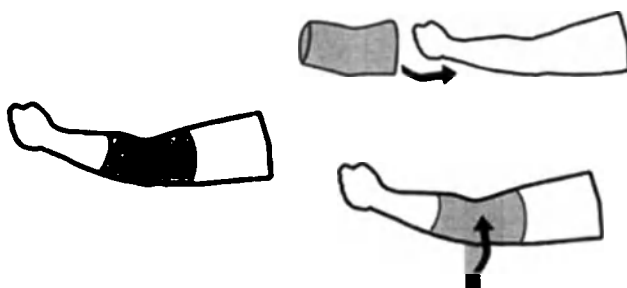


AS-L



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

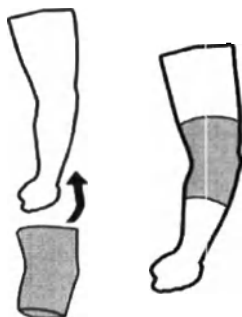


AS-L-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

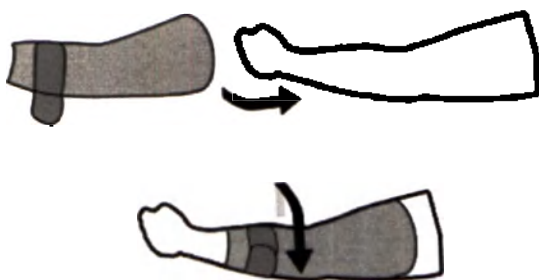


AS-L-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

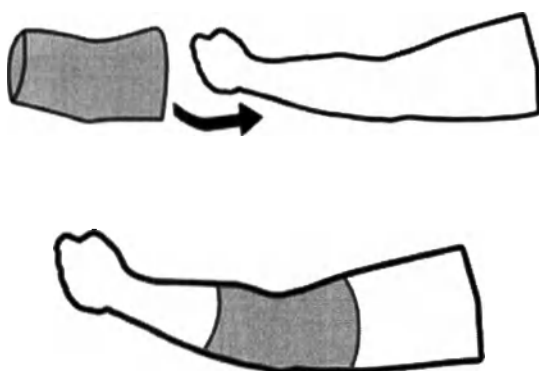


AM-SL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

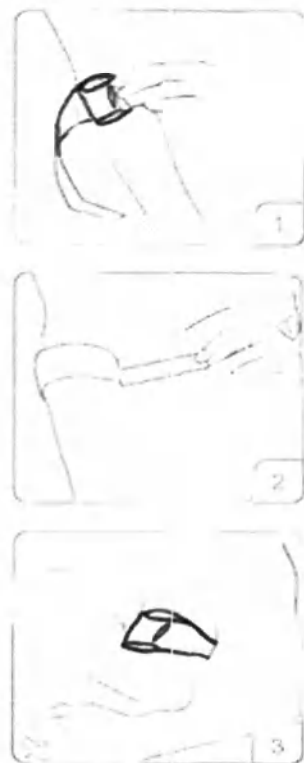


AM-SL-01/CCA



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

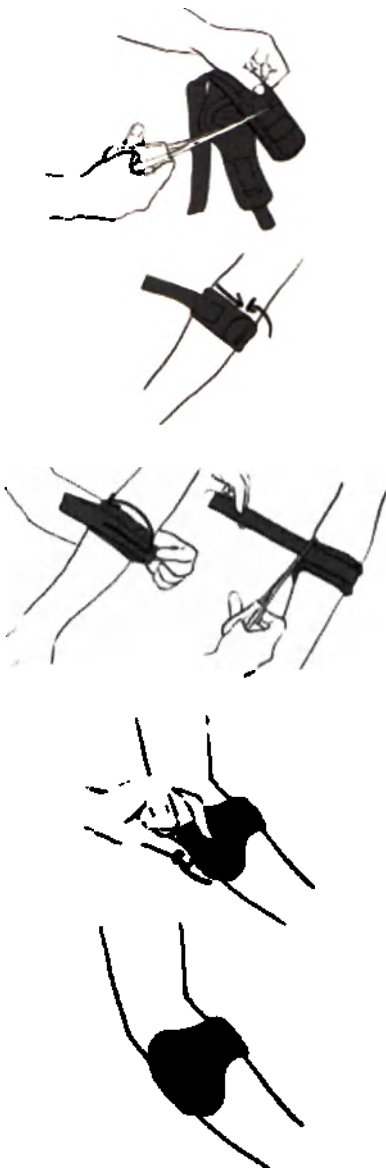


AS-L/F



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

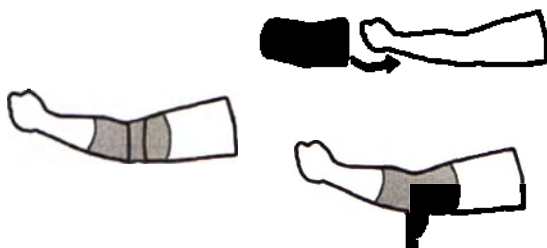


AS-L/A



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

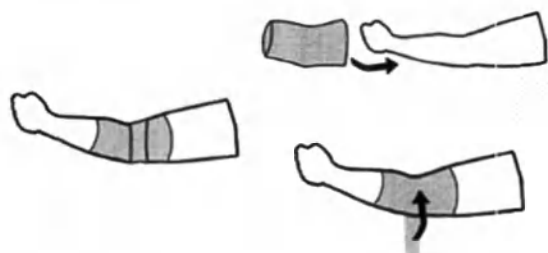


AM-TL-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

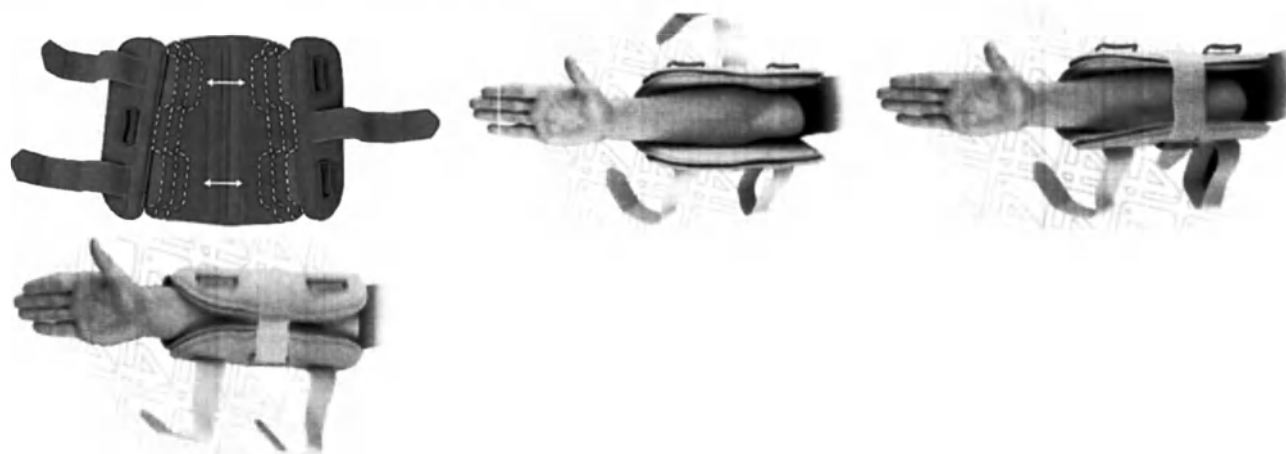




AM-TL-01 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

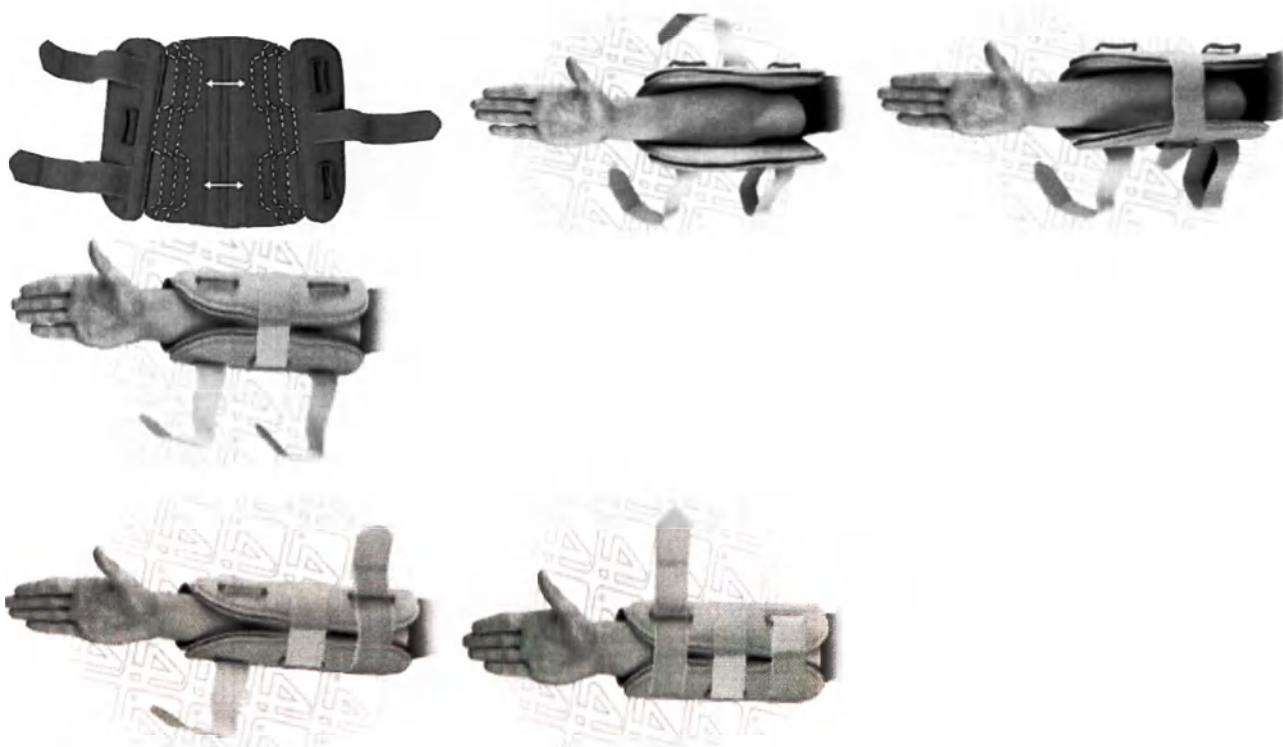


U-SL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

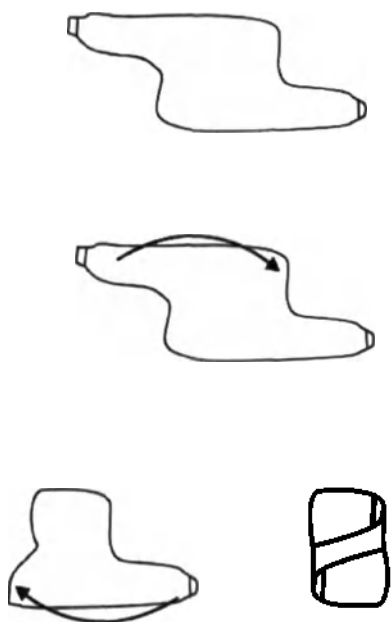


EB-L



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

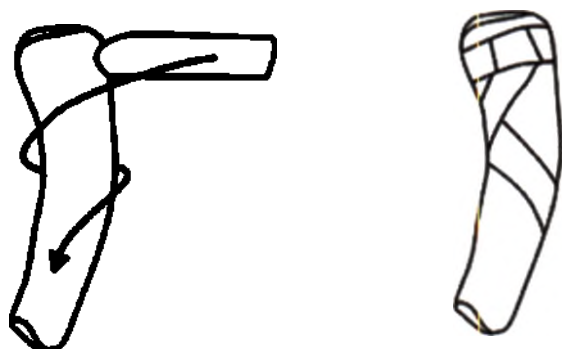

OKG-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

Вставки ортеза должны быть установлены в желаемом угле изгиба.



Прикрепите ортез к конечности таким образом, чтобы логотип был на плечевой кости.

Пропустите ремень через верхние пряжки D (1) и B(2).




Оберните вокруг плеча и застегните липучку (3) в указанном порядке.



Пропустите ремень через верхние пряжки D (1) и B(2).

Оберните вокруг плеча и застегните липучку (3) в указанном порядке.

Повторите действие еще раз, как в случае с верхней застежкой.

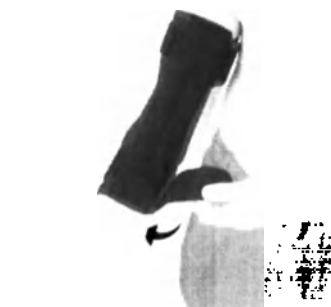

Готовое изделие.




AM-KG-AR/1R



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

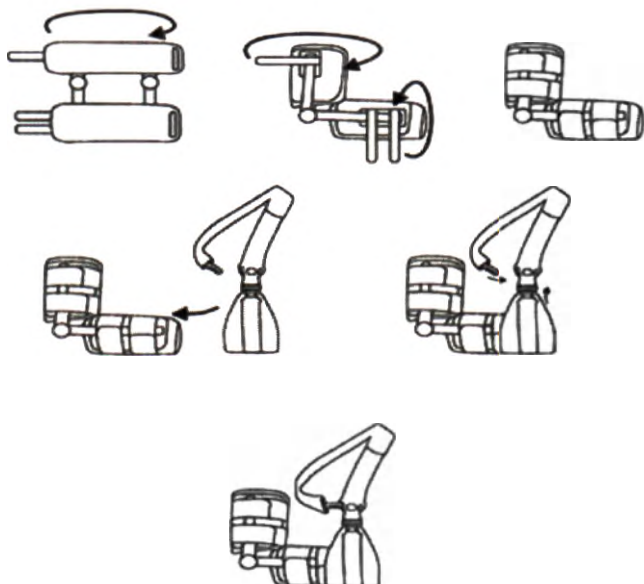


AM-KG-AR/1R (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

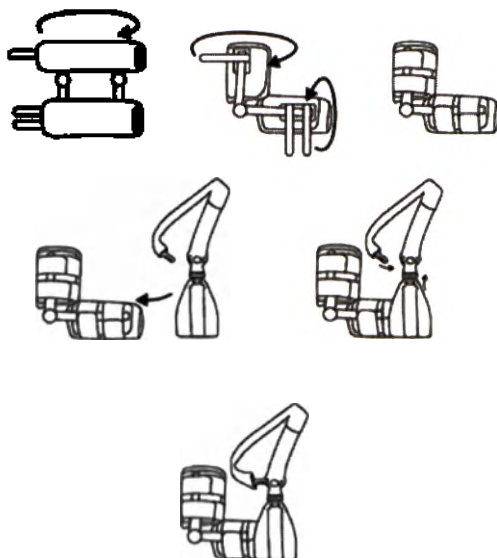


4ARMY-SL-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

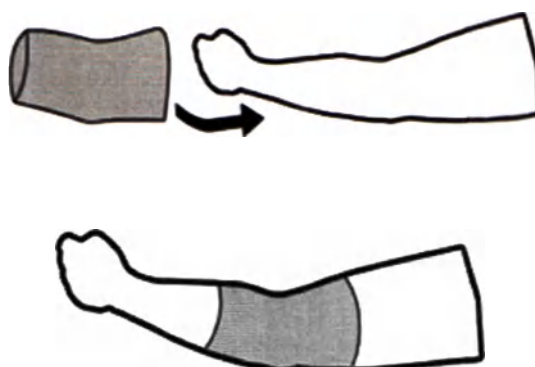


4ARMY-SL-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

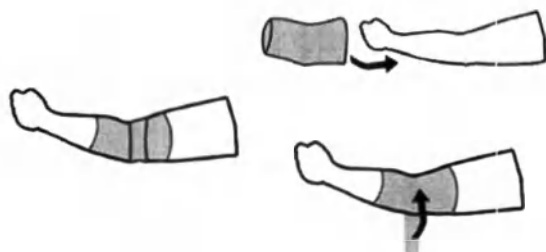


4ARMY-SL-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

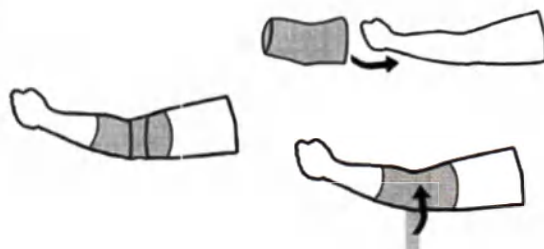


4ARMY-SL-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

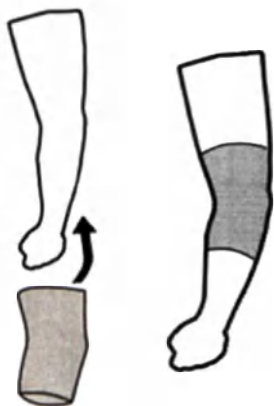


FIX-KG-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

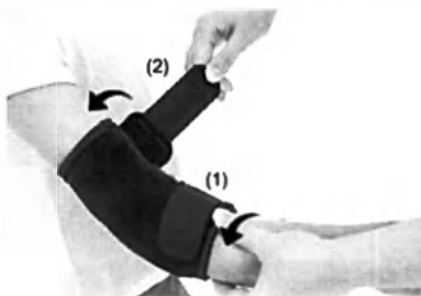

Наденьте ортез на руку

Застегните липучку (1) и (2)



При необходимости закрепите дополнительный защита локтя

Готовое изделие.

FIX-KG-19

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на руку так, чтобы часы рельса были на боковой колесной арке плечевой кости.



Закрепите периферическую повязку предплечья (1) и плеча (2)



Проденьте нижний и верхний периметр через пряжку (1) и закрепите липучку (2)




Готовое изделие.



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

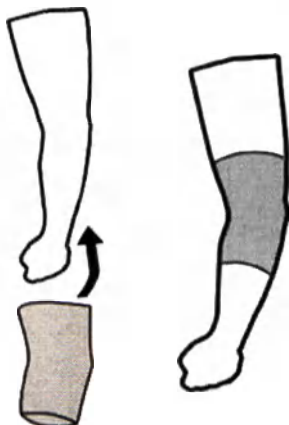

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже






Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

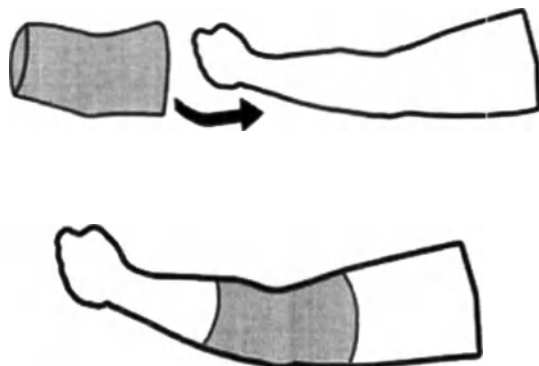

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

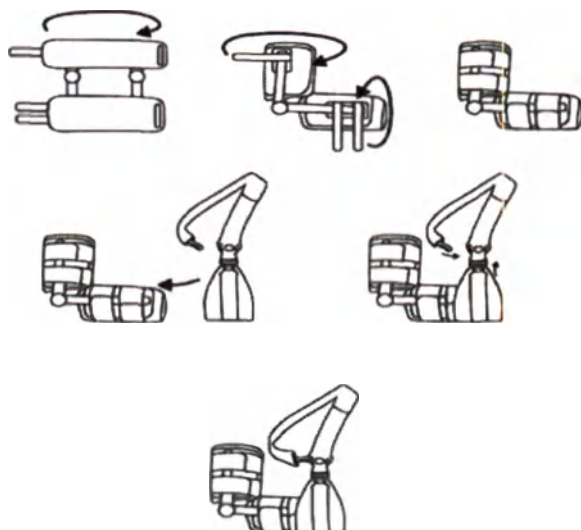


4ARMY-SN-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

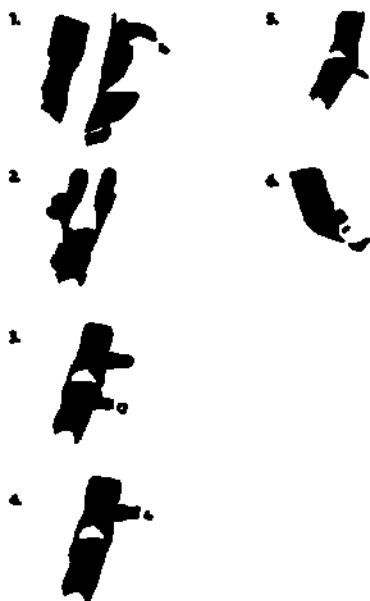

4ARMY-SN-13



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-SN-14




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

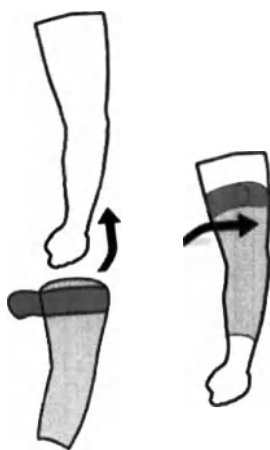

4ARMY-SL-06

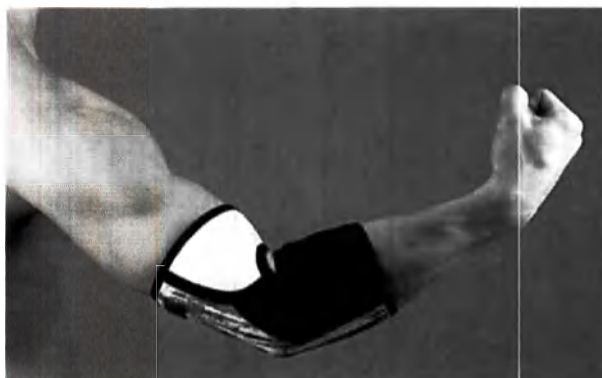


Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.


Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на

рисунке ниже

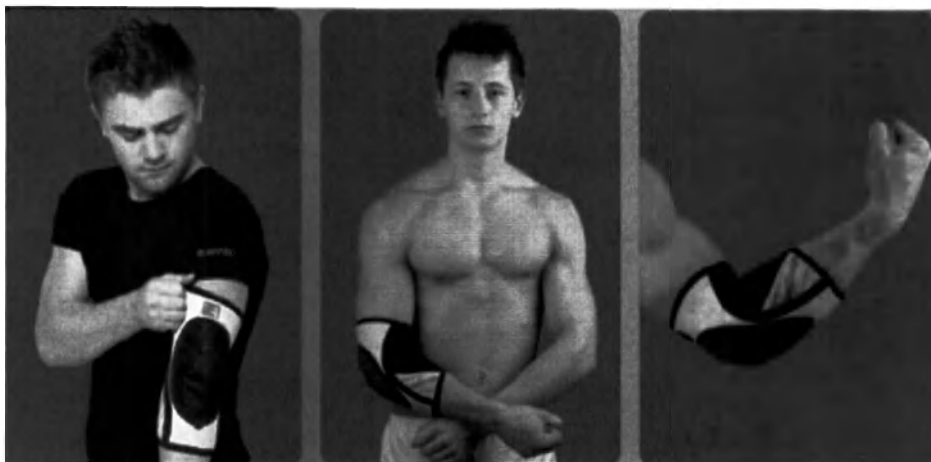

4ARMY-SL-07

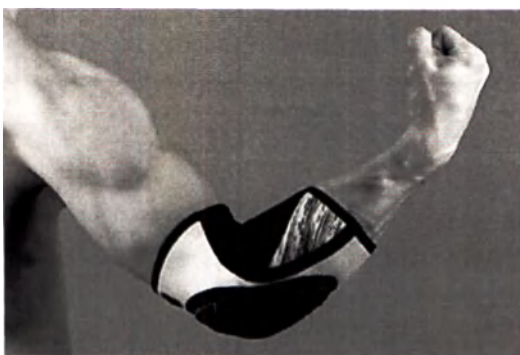


Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке

ниже

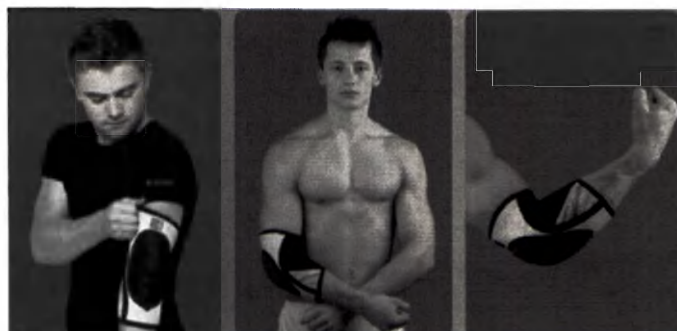

4ARMY-SL-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




4ARMY-SL-09



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

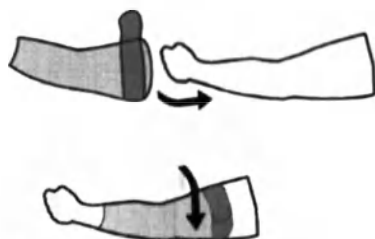


4ARMY-B-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

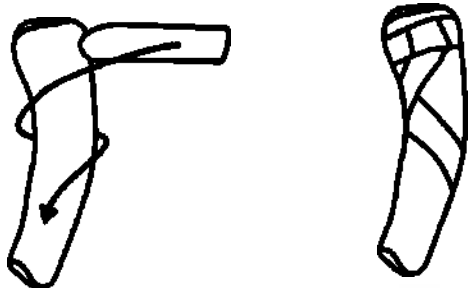

OKG-22

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-KG-AM/IR



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

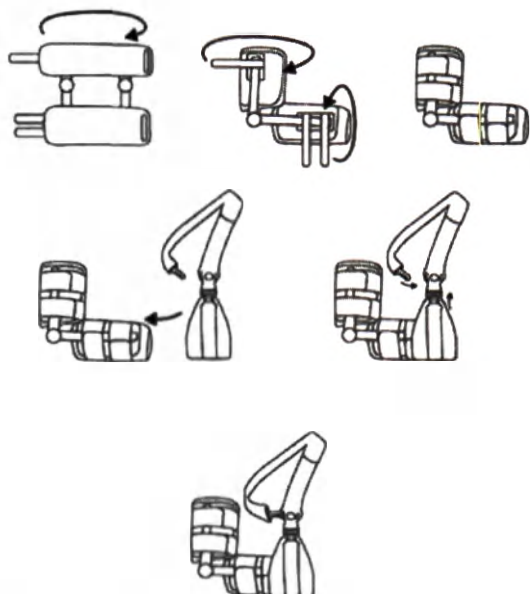


AM-KG-AM/IRE



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

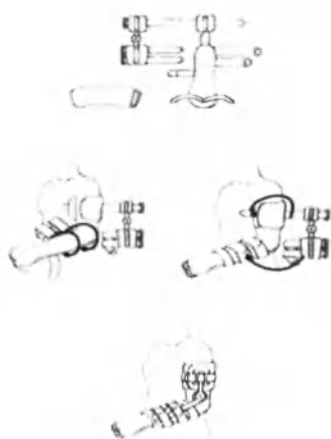

FIX-KG-20



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

Наденьте ортез на руку таким образом, чтобы механизм шины был на боковой плечевой кости.



Отрегулируйте длину шины так, чтобы рука ребенка свободно обнимала ручку шины.



Закрепите периферическую повязку предплечья (1) и плеча (2)



Проденьте Нижний (1) и верхний (2) обводной ремень через пряжку и закрепите липучку.



Наденьте плечевой ремень в соответствии с указанным направлением и закрепите карабин



Установите подходящую длину стропа



Внимание !

После регулировки длины рельса убедитесь, что винты рельса правильно затянуты

Только правильно затянутые винты рельса гарантируют безопасность использования изделия.



Готовое изделие.

4ARMY-SN-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

PCO-A-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



PCO-A-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AS-PL



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

Поместите ортез на конечность так, чтобы силиконовый элемент находился в больном месте.



Проденьте ремень через пряжку и закрепите на липучке.

Готовое изделие.



4ARMY-SL-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-OSN-U-17



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

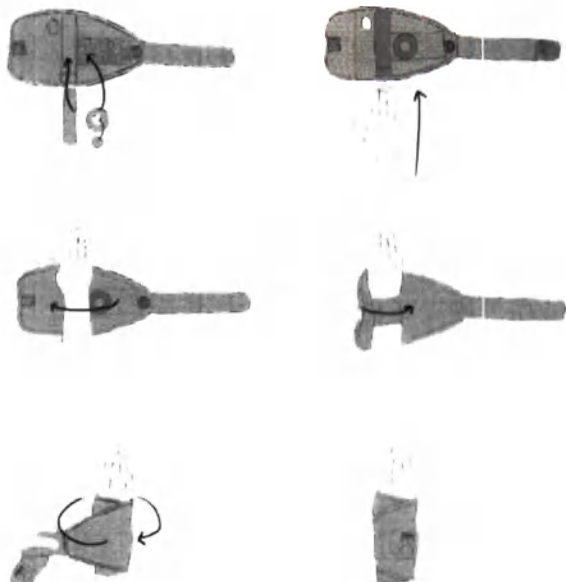


EB-L-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

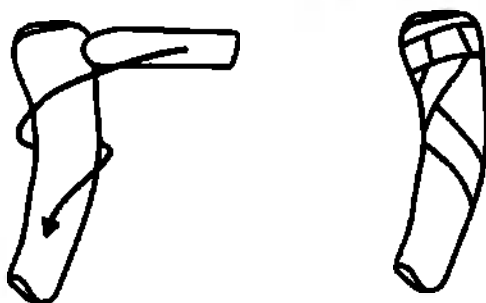

4ARMY-SN-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



PCO-A-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-AO-KG-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОДОГНАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПОД ЛЕВОЕ ПЛЕЧО, СНАЧАЛА ПРОЧИТАЙТЕ ПУНКТ 9.


Отрегулируйте угол обзора плеча, одновременно удерживая блокировки с обеих сторон.



Прикрепите опорную часть к мягкой части ортеза.



Отрегулируйте и закрепите ремни ортеза.

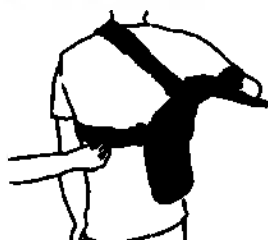

Прикрепите бедренную подушку, используя широкий поясной ремень.



Отрегулируйте пояс и отрежьте лишнюю ткань



Пристегнутый ремень



Пристегните ремни



Установленный ортез



ПОСАДКА НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Отсоедините удерживающий ремень и выдвиньте деталь, как показано на рисунке



Наденьте ремни, переверните стабилизатор и вставьте его обратно, как показано на рисунке



Закрепите удерживающий ремень




Для установки всего ортеза на левое плечо выполните аналогию с пунктом 1-8

AM-AO-KG-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

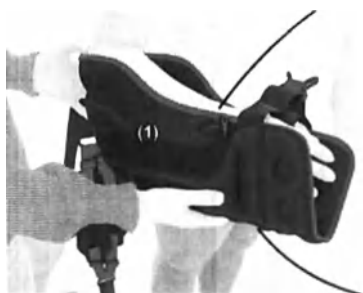

1) Поместите руку в рукав (1).



2) Установите правильную длину


рукоятка с помощью регулятора (2)...



3) и ленты под рукавом (3) .



4) Наденьте поддержку на руку(4)

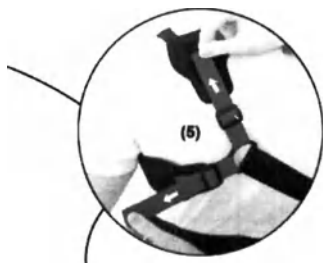

5) установите их

длина с помощью регуляторов (5) и (6)



6) Прикрепите ленту (7) к зажиму на рукаве.



7) Закрепите рукав липучкой (8).



8) Готовое изделие.




AM-SOB-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

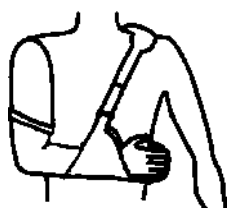

AM-BX-01 Ортез на плечевой сустав



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-BX-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

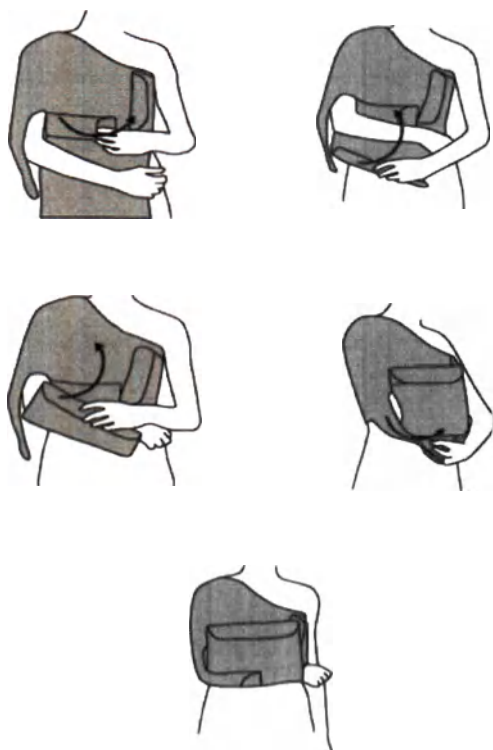


AM-BX-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

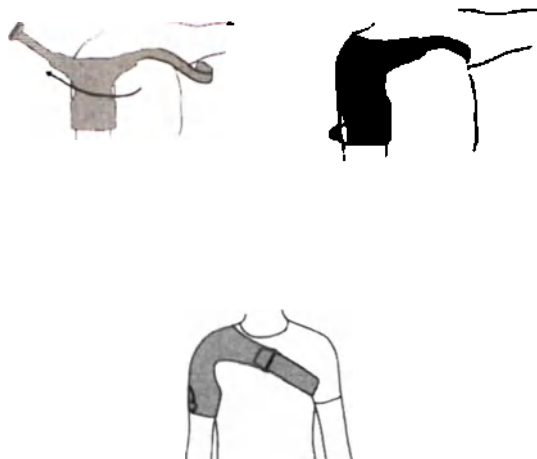

MASTER-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



1). Наденьте ортез (1) на плечи




2). закрепите ее спереди на липучке (2) и отрегулируйте длину подтяжек с помощью регуляторов (3).

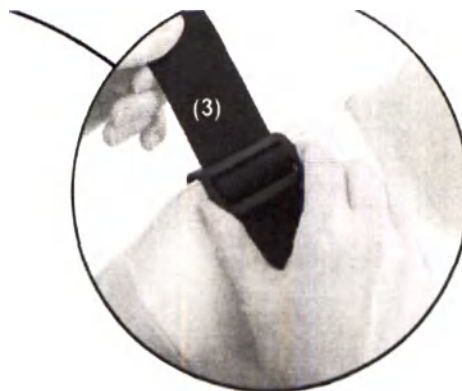



3). Пропустите защитную ленту через пряжку
и застегните на липучку (4).

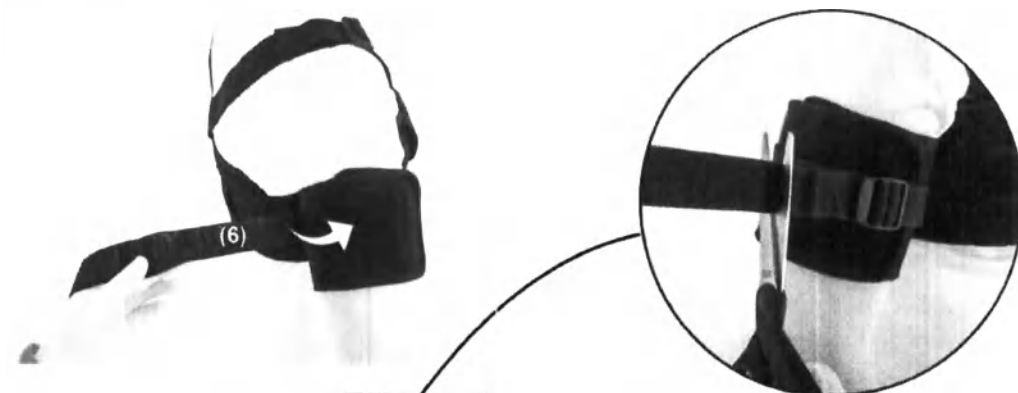

4). Закрепите повязку на руке с помощью липучки (5).



5). Готовое изделие.

OKG-01




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



1). Поместите элемент (1) на плечо. Прикрепите пояс (3) к плечевой части ортеза и закрепите.

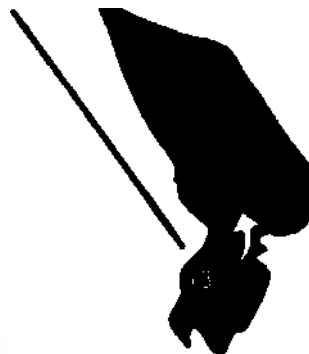

2). Поместите элемент (2) на другое плечо. Прикрепите ремень (4) к плечевой части ортеза и застегни.



3). Установите соответствующее сжатие плечь и закрепите заднюю липучку.



OKG-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Установите подушку на туловище и пропустите пояс через пряжку




Отрежьте лишнюю длину ремня и закрепите наконечник с крючка на липучке

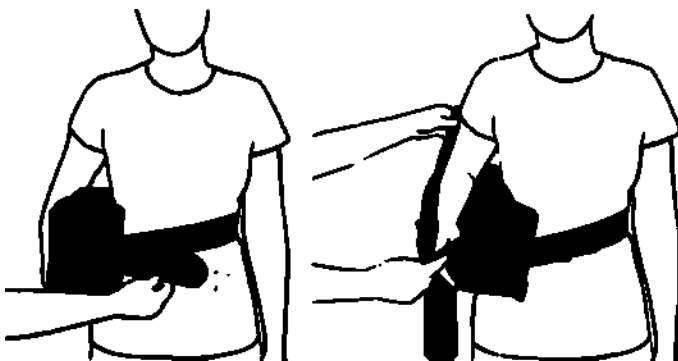


Пристегните ремень

Наденьте рукав и прикрепите к подушке

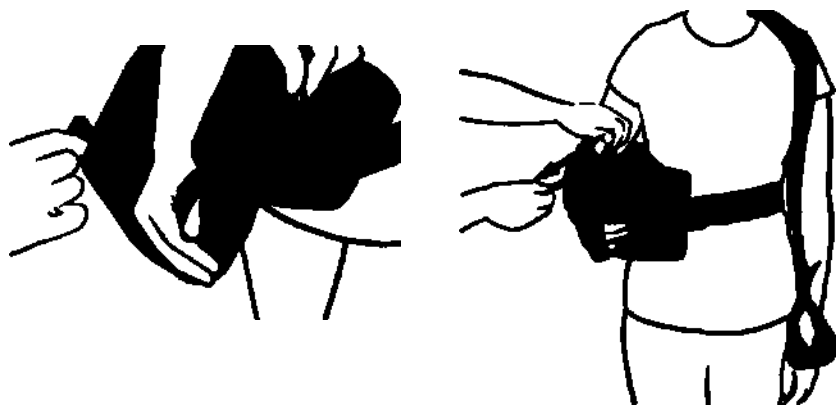


Поместите большой палец в петлю

**Отрегулируйте длину ленты для большого пальца
с помощью репы.**

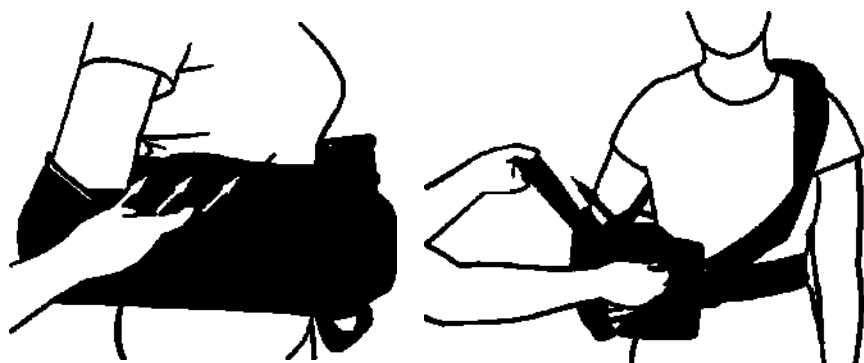


Застегнуть защелки

**Пропустите ремень через плечо и пропустите
через пряжку**

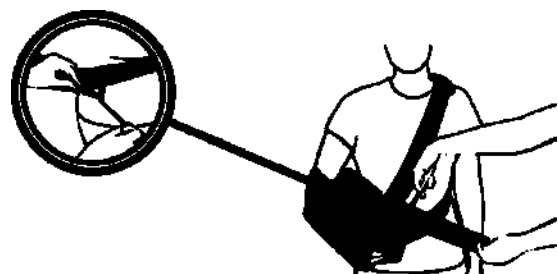

Отрежьте лишнюю длину ремня и закрепите наконечник липучкой

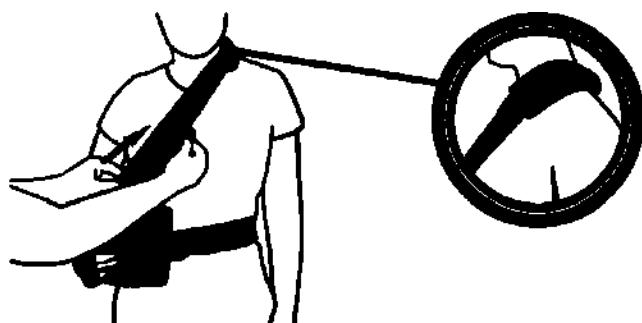

Пристегните ремень и установите крышку шеи



Готовое изделие.

OKG-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Проденьте ремень через плечо и закрепите карабин



Пропустите руку через строп.



С помощью регулятора отрегулируйте длину ленты.



Готовое изделие.

AM-SOB



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



АМ-KOB



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



АМ-KOB (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже




AS-B



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

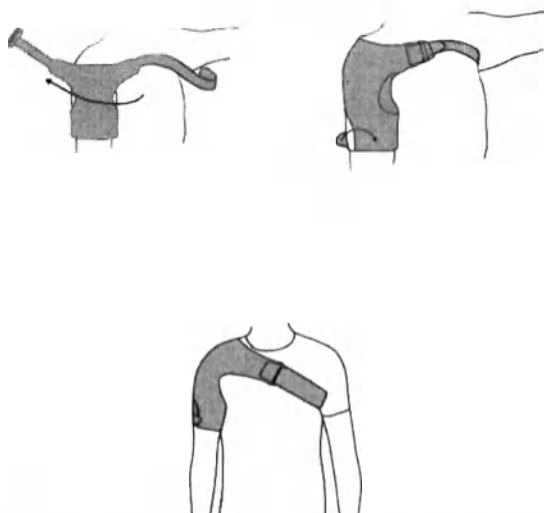

AM-AO-KG



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



1). Поместите руку в рукав (1).



2). Установите правильную длину рукав с помощью регулятора (2) и ленты под рукавом (3). Прикрепите ленту с пряжкой (4).

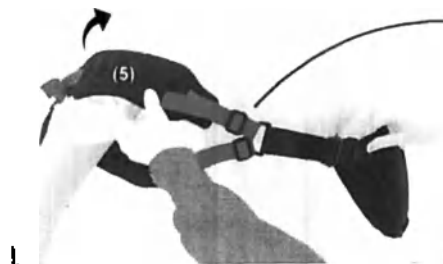

3).



4). Наденьте защитные кожухи (5) на руку и установите их длину с помощью регуляторов (6) и (7).



5). Прикрепите ленту (8) к зажиму на рукаве.



6). Закрепите рукав липучкой (9).



7). прикрепите двухстороннюю липучку (10) к рукаву.



отрегулируйте объем с помощью регулятора (12).

8). закрепите бедренную повязку (11) и



бедренной повязке.



9). Прикрепите рукав с липучкой к



10). Готовое изделие.

4ARMY-B-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



FIX-KG-12



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на плечо



Пристегните нагрудный ремень

Пристегните нагрудный ремень сзади



Застегните плечевую липучку

Готовое изделие.

ТВ-02




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

ТВ-03

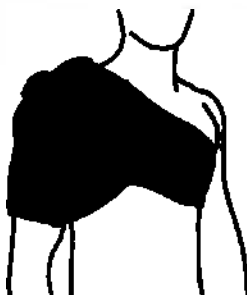

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

MASTER-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SN-03

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SN-05

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SN-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-SN-15



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Проденьте ремень через плечо и закрепите карабин



Пропустите руку через строп.



С помощью регулятора отрегулируйте длину ленты.



Готовое изделие.

4ARMY-SL-10



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-B-06



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-B-08



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

OKG-26



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



OKG-21



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Поместите ортез на плечо и закрепите липучку (1).



Прикрепите кольцевую ленту (2) к плечевой части ортеза и закрепите. Если окружность больше элемент липучки (3) и закрепите ленту.



Застегните нагрудный ремень спереди на липучке



A



Если вы хотите получить правильную стабилизацию прикрепите плечевой элемент (4) на липучке к соответствующему

способ.



Готовое изделие.

AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ROTATOR



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.




1). Части ортеза:


(А) Рукав

(В) поддерживающая подушка


Для вращения плеча 10° или 15°

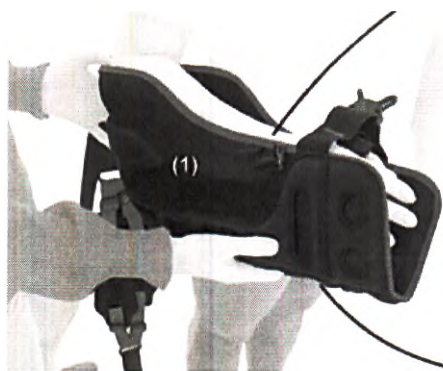


2). Поместите руку в рукав (1).

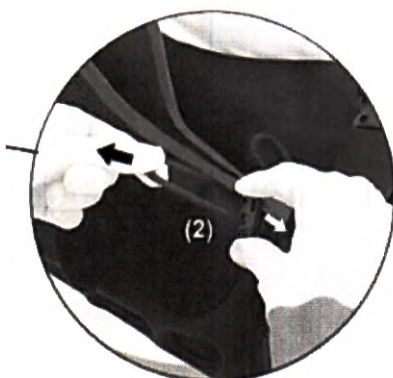

3). Установите правильную длину рукоятки с помощью регулятора (2) и ленты под рукавом (3) .

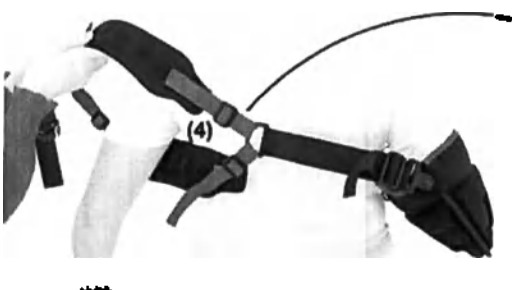

4). Наденьте защитные повязки (4) на руку и установите их длину с помощью регуляторов (5) и (6).

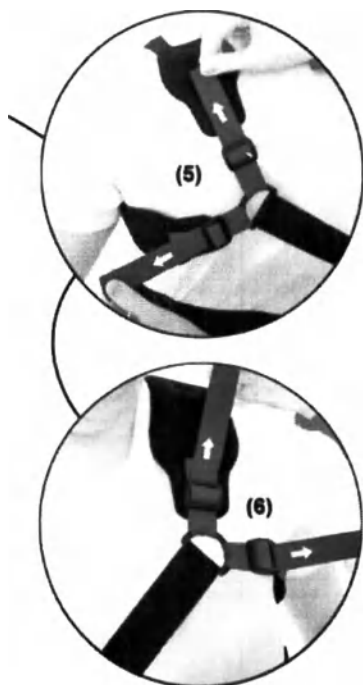

4.1). регуляторы (5) и (6).



5). Прикрепите ленту (7) к зажиму на рукаве.




липучке (8).



6). застегните рукав с помощью ленты на



7). Прикрепите двухстороннюю липучку (9) к рукаву.

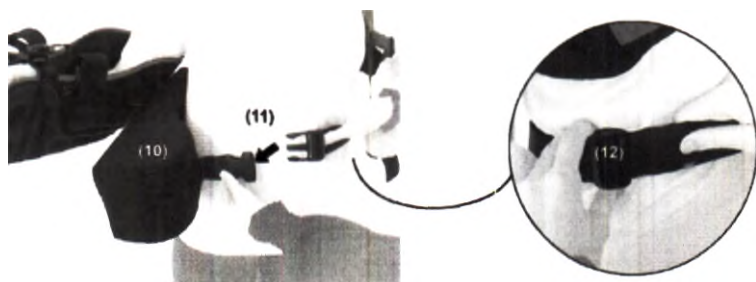

8). наденьте подходящую подушку (10), закрепите защелкивающуюся пряжку (11) и установите объем с помощью регулятора (12).



9). Прикрепите рукав к подушке (13) и установите соответствующий угол поворота плеча.




10). Готовое изделие.

AM-AO-KG-02 CLEVER 2 ABDUCTOR



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

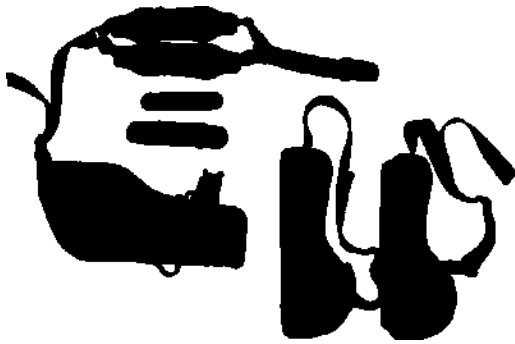


1). Части ортеза:


(А) Рукав

(В) поддерживающая подушка

Для отведения плеча 10° или 15°

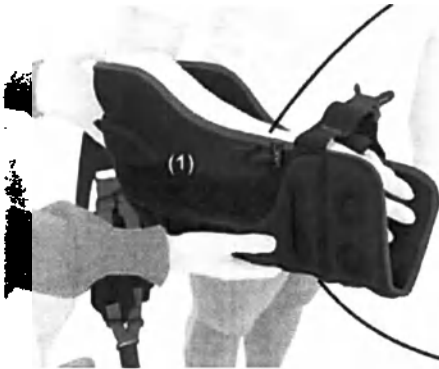


2). Поместите руку в рукав (1).

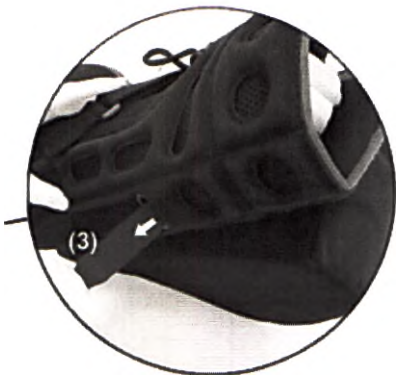


3). Установите правильную длину рукоятки с помощью регулятора (2)

и ленты под рукавом (3) .

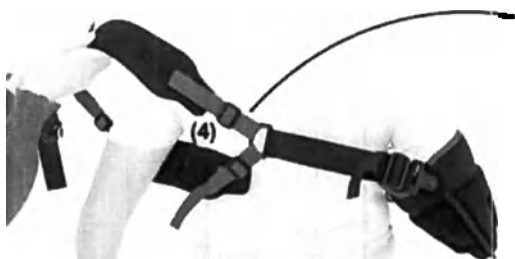

4). Наденьте защитные повязки (4) на руку и установите их длину с помощью регуляторов (5) и (6).

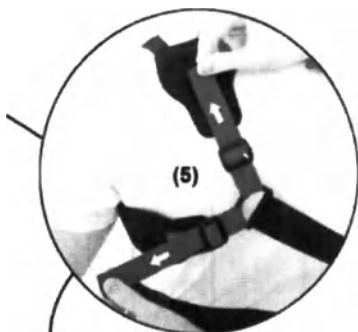

4.1). регуляторы (5) и (6).



5). Прикрепите ленту (7) к зажиму на рукаве.




липучке (8).



6). застегните рукав с помощью ленты на



7). Прикрепите двухстороннюю липучку (9) к рукаву.

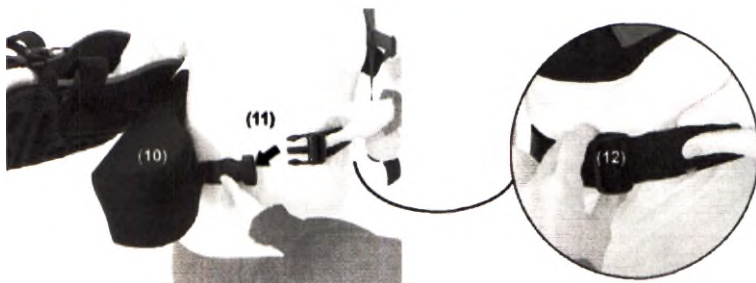

8). наденьте подходящую подушку (10), закрепите застегивающуюся пряжку (11) и установите объем с помощью регулятора (12).



9). Прикрепите рукав к подушке (13) и установите соответствующий угол отведения плеча.



10). Готовое изделие.


AM-SOB-03/AIR



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

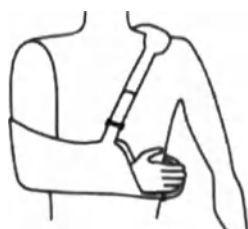


MASTER-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

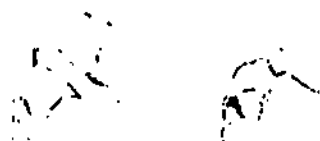


AM-SOB-02



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

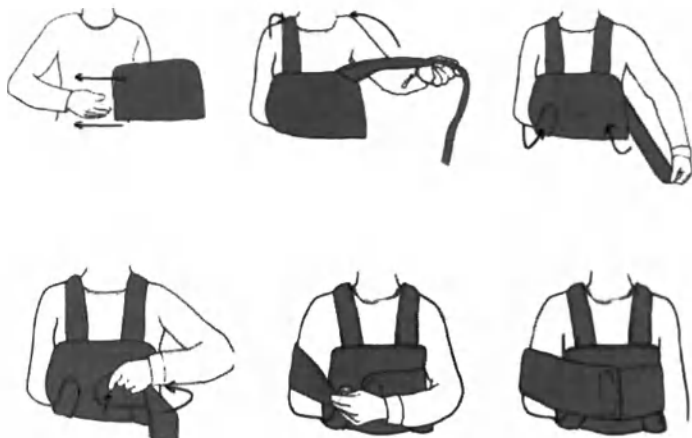


AM-SOB-02 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

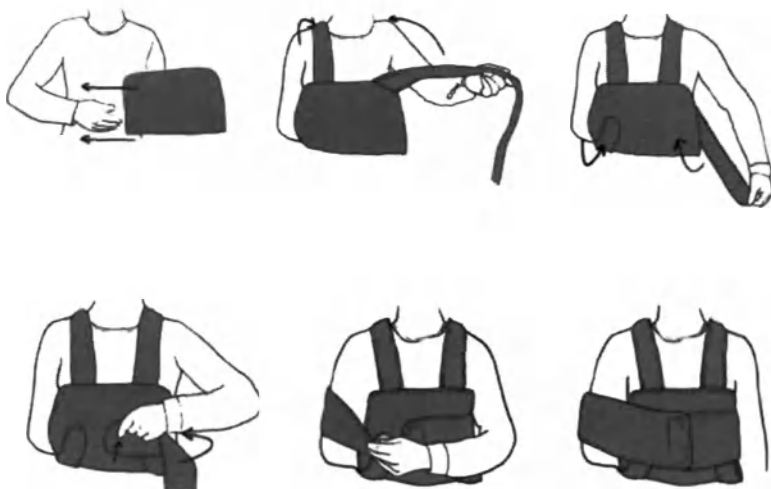

AM-SOB-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-SOB-03 (детский)

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-B-04



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


4ARMY-B-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

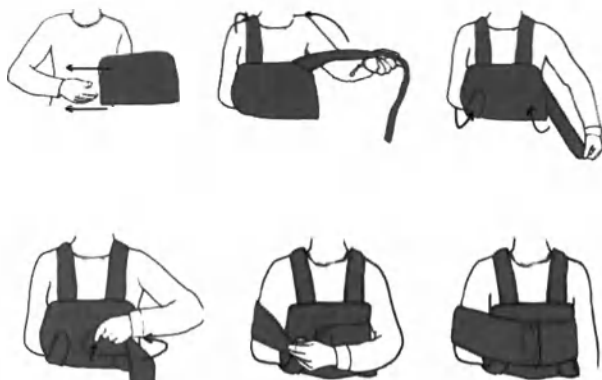

OKG-05




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже


Заблокируйте спинные ремни,что бы они не перемещались

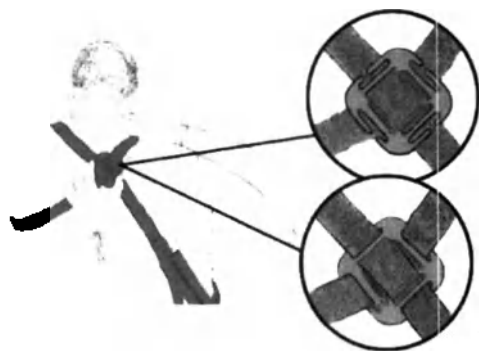

Наденьте ортез на здоровое плече



Закрепите ремни в переднем и заднем фиксаторах

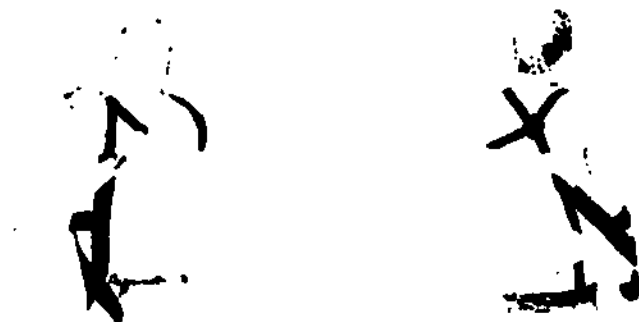

Перетяните ортез на здоровую конечность таким образом, чтобы спинной фиксатор был по середине плеч, ровно между лопаток.




Установите руку на специальном держателе для ладони.



Установите локтевой ремень ниже локтя.

Поправьте подмышки для максимального комфорта.

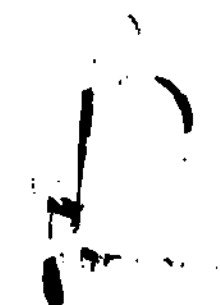

AM-SL-03



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на руку

Отрегулируйте высоту плеча pelot

и предплечья




Установите длину направляющей руки.

С помощью шестигранного ключа установите правильное положение руки.



Закрепите периферийные ленты предплечья (1 и 2) и плеча (3)

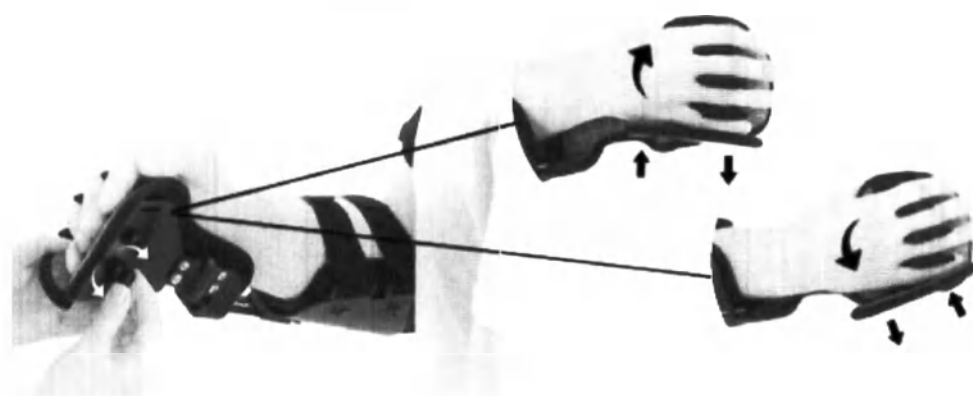


С помощью ручек расположите ладонь к локтевой или радиальной.



Застегнуть пальцы



С помощью ручки установите предплечье в желаемое положение супинации, пронации или нейтральной.

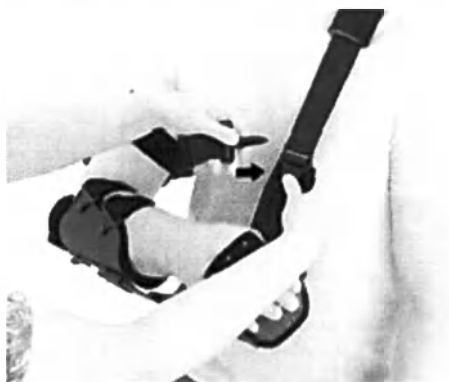

Проденьте ремень через плечо и закрепите карабин.





Поднесите руку к строппе и застегните пряжку.



С помощью регулятора отрегулируйте длину
ленты в sling'e

Готовое изделие - версия с рельсом

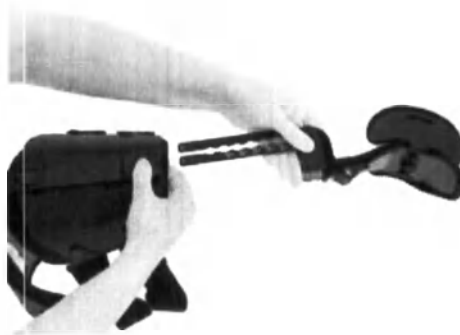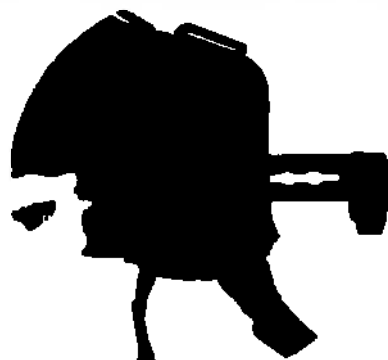

С помощью ключа снимите замок

Рельс

Снимите рельс с Системы Press-slide



Застегните ремни для рук и предплечья
по предыдущей схеме и застегнуть
перевязь.

Готовое изделие - вариант без рельса.



AM-SOB-01



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения
указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

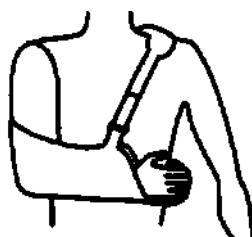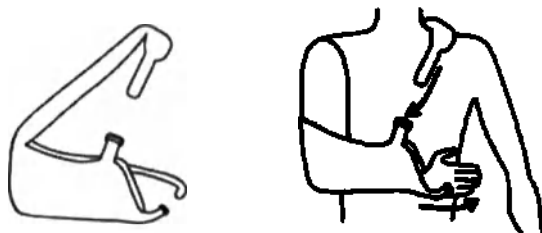


AM-SOB-05



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

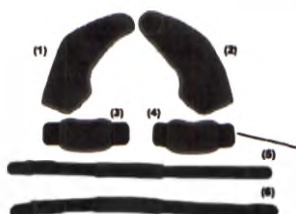

Поместите элемент (1) на плечо. Прикрепите пояс по периметру (3) к плечевой части ортеза и закрепите.




Поместите элемент (2) на другое плечо. Прикрепите ремень периметра (4) к плечевой части ортеза и застегните.



Установите правильное сжатие на плечи и закрепите заднюю липучку



Закрепите крест-накрест (5,6) сзади, как показано на рисунке.

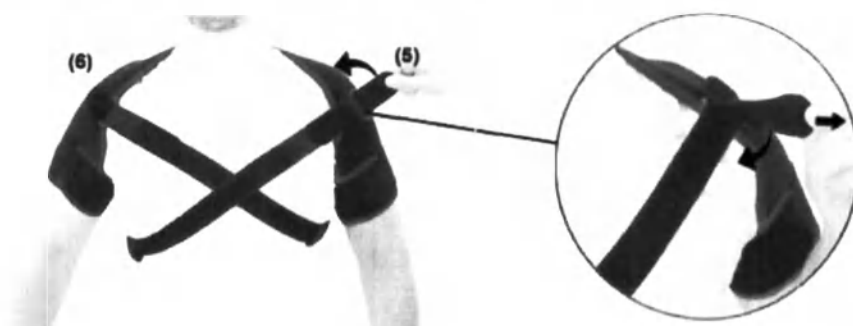

Проденьте поперечные ремни (5,6) через передние пряжки и отрегулируйте их надлежащее сжатие



Готовое изделие.


AM-SOB-06




Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

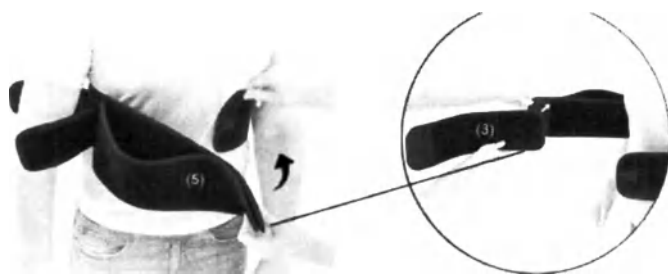

Установите ремень (5) на линию ребер и закрепите спереди на липучке. Если окружность больше удлинительный элемент на липучке (3) и пристегните ремень.

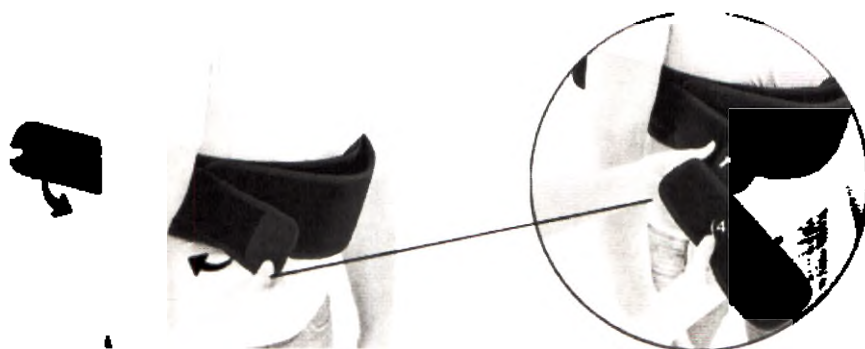

: Закрепите ленту периметра на плече. Если цепь больше, прикрепите удлинительный элемент

липучка (4) и закрепите ленту по периметру.



Закрепите клинья, вращающие плечо. Помни! Вы можете закрепить только один клин или два одновременно

Вы также можете использовать ортопедию без клиньев. Количество клиньев или их отсутствие будет определять степень вращения



Прикрепите ремень на липучке к задней части ремня (1). Пропустите ремень через плечо и прикрепите строп спереди на липучке.




При необходимости поместите большой палец в специальную петлю.



Застегните ремень на пряжку

Установите подходящую длину плечевого ремня.

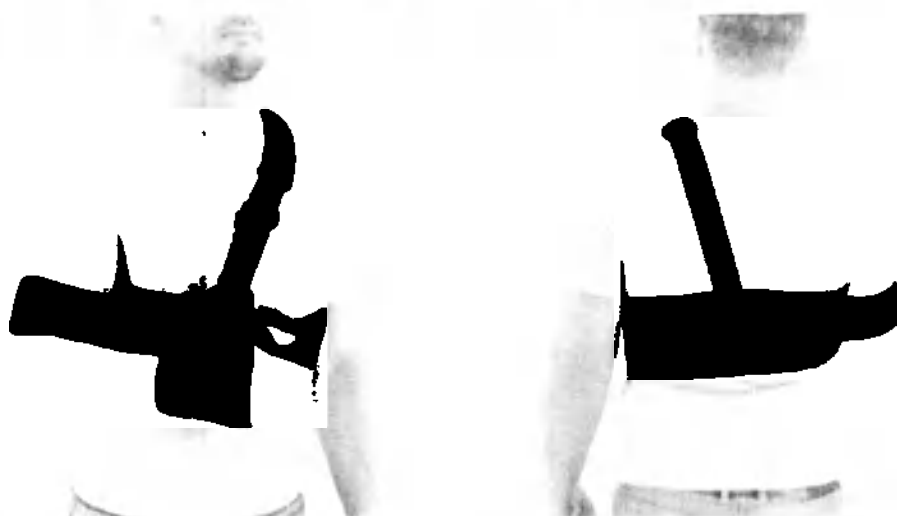

Готовое изделие.

AM-SOB-07



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-SOB-07 (детский)



Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже


MASTER-01

Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как одеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность одевания ортеза указана на рисунке ниже

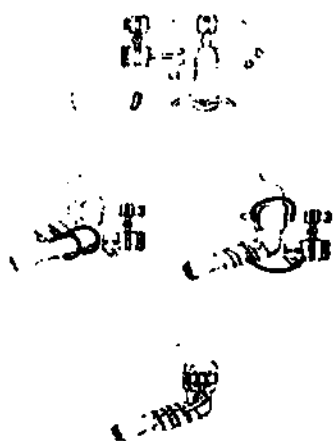

Меры предосторожности при применении

ВНИМАНИЕ !

Повторное использование изделия для других пациентов и недостаточная гигиеническая обработка

Раздражение кожи, возникновение экзем или инфекции вследствие заражения микроорганизмами

- Изделие разрешается использовать только для одного пациента.
- Регулярно чистите изделие.

Неправильное наложение или слишком тугое затягивание изделия

Раздражение кожи вследствие перегрева, локальное сдавливание в результате слишком плотного прилегания к телу

- Проверьте правильность прилегания и посадки изделия.
- Не используйте изделие в случае сомнений при возникновении раздражения кожи.

Контакт с высокими температурами, раскаленными предметами или огнем

Опасность травмирования (напр. ожоги) и опасность повреждения изделия

- Изделие хранить вдали от открытого огня, жара и других источников интенсивного теплового излучения.

ВНИМАНИЕ !

Контакт с жиром- и кислотосодержащими средствами, мазями и лосьонами

Недостаточная стабилизация вследствие потери свойств материала

- Не подвергайте изделие воздействию жиром- и кислотосодержащих средств, мазей и лосьонов

Ненадлежащее использование и изменения

Изменение или утрата функций, а также повреждение изделия

- Следует использовать изделие только по назначению и обращаться с ним аккуратно.
- Внесение изменений, изначально не предусмотренных конструкцией изделия, не допускается.

Использование изношенного или поврежденного изделия

Ограниченное действие

- Каждый раз перед использованием изделия необходимо выполнять его контроль на предмет надлежащей работы, наличия признаков износа и повреждений.
- Не используйте продукт в случае его неисправности, наличия признаков износа или при повреждении.

Очистка, дезинфекция

Очистка текстильной набивки.

- 1) Снять все текстильные набивки с ортеза.
- 2) Застегнуть все застежки-липучки.
- 3) Рекомендация: использовать мешок или сетку для стирки.
- 4) Текстильные набивки стирать при температуре 30 °С, используя обычное мягкое моющее средство. Не использовать кондиционер для белья. Хорошо прополоскать.
- 5) Сушить на воздухе. Не подвергать воздействию высоких температур (например, прямые солнечные лучи, тепло от кухонных плит или батарей отопления).
- 6) Вновь закрепить текстильные набивки на отрезе.

Рама ортеза

- 1) Следует протирать детали влажной тканью по мере необходимости.
- 2) Следует сушить изделие на воздухе. Не подвергать воздействию высоких температур (например, прямые солнечные лучи, тепло от кухонных плит или батарей отопления).

Срок службы

Срок службы ортезов не менее 5 лет

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Ортезы при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию температур от -10 °С до +60 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, без образования конденсата, при атмосферном давлении от 200 до 1500 гПа, вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.

Ортезы можно транспортировать в любом закрытом транспортном средстве. При транспортировке необходимо обеспечить защиту изделия от влажности.

Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов для температурного режима от +10 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80% и вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.

Упаковка

Изделия упаковываются в полиэтиленовые пакеты или картонные коробки, внутри которых есть руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Для целей транспортировки изделия упаковываются в общую картонную коробку.

Маркировка

Расшифровка маркировочных символов

Символ	Расшифровка
	Производитель
	Дата производства
	Соответствие директиве ЕЕС 93/42
	Не утилизировать с бытовыми отходами

MEDICAL DEVICE CLASS I	Медицинское изделие класса I
SIZE / ROZMIAR	Размер
SIDE / STRONA	Сторона
Made in Poland	Сделано в Польше
Nr. ref:	Каталожный номер
	Обратитесь к инструкции по применению

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие качества изделий заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок годности изделий – 12 месяцев с даты производства, 6 месяцев с даты реализации.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения МИ

Использованные изделия и изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируются как бытовые отходы.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790 (класс Б).

Перечень международных нормативных документов/стандартов

- PN-EN 1041+A1:2013-12 «Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем»
- PN-EN 12182:2012 «Устройства помощи для инвалидов. Основные технические требования»
- PN-EN ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования к регулированию»
- PN-EN ISO 14971:2012 «Применение менеджмента рисков в производстве медицинских изделий»
- PN - EN ISO 15223-1:2017-02 «Изделия медицинские. Символы, используемые на ярлыках медицинских изделий при их маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1. Общие требования»

/Перевод с польского языка на русский язык/

«REN4MAT Славомир Вронски»
Генеральный директор

Славомир Вронски

/Штамп:
REN4MAT
ВЛАДЕЛЕЦ
Славомир Вронски/
/подпись/

/Печать:
REN4MAT Славомир Вронски
36-060 Глогув Малопольски, ул. Пяски 47
Тел. 16621-41-35 тел/факс: 16621-42-13
ИНН: 8131804393 Реестр субъектов народного хозяйства: 180151618/

/Штамп:

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
БОГДАН РОЙОВСКИ
НОТАРИУС
БОГДАН ЧЕРВОНКА
НОТАРИУС
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
35-32 Жешув, ул. Замкова 9
ИНН: 813-37-81-114, тел.: 853-48-01/

Свидетельствую, что 22.04.2021 г. в Нотариальной конторе в г. Жешув, на ул. Замковой 9, Господин Славомир Рышард Вронски, сын Рышарда и Алисы, Персональный идентификационный номер 62011210715, проживающий под адресом: 35-321 Жешув, ул. На Скалы 5Б, владелец удостоверения личности номер AUE 145835, подписал настоящий документ.

Взыскано нотариальный сбор на основании §13 Постановления Министра Юстиции от 28.06.2004 г. (ЗВ № 148, п. 1564, с изменениями и дополнениями) в размере 20 злотых и налог НДС 23% от указанной суммы в размере 4,60 злотых.

Жешув, 22.04.2021 г.

Нотариальный реестр А номер 3595/2021

/Гербовая печать:

Богдан Червонка
Нотариус в г. Жешув
1

/Государственный герб Республики Польша/

/Штамп:

Богдан Червонка
НОТАРИУС/

/Подпись/

/Гербовая печать:

Богдан Червонка
Нотариус в г. Жешув
1

/Государственный герб Республики Польша/

/подпись/

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мукановым Глебом Борисовичем.



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого мая две тысячи двадцать первого года


Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Муканова Глеба Борисовича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2021-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

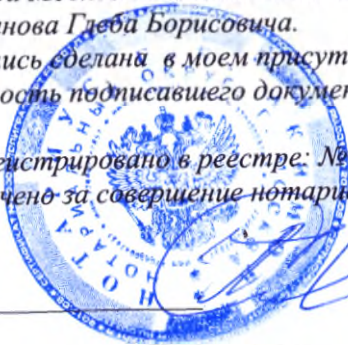

Е.Д. Ребрина

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 128 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

