

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ USER MANUAL

«Изделия ортопедические «REN4MAT» для поддержки, коррекции или
иммобилизации головы, шеи, туловища».

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»
«REN4MAT Sławomir Wroński» Польша

CEO

(должность/position)

Sławomir Wroński

(имя/name)

reh mat WŁAŚCICIEL
(подпись/signature)
Sławomir Wroński

М.П. / Stamp

 **REH4MAT** Sławomir Wroński
36-050 Głogów Matopolski, ul. Piaski 47
Tel. 16621-41-35 tel./fax 16621-42-13
NIP: 8131804393 REGON: 180151618

Repertorium A numer 11373 /2021

Poświadczam, że w dniu 15.12.2021r., w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej 9, Pan Sławomir Ryszard Wroński, syn Ryszarda i Alicji, zamieszkały 35-321 Rzeszów ul. Na Skąły 5B, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego numer DCL 391405, wg oświadczenia przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą REH4MAT Sławomir Wroński, NIP 813-180-43-93, dokument niniejszy podpisał.-----

Pobrano takse notarialną na podstawie §.13 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148 poz.1564 ze zm.) w kwocie 20 złotych oraz podatek VAT 23% od tej kwoty w wysokości 4 złote 60 groszy.-----
Rzeszów dnia 15.12.2021r.-----



Bogdan Czerwonka
NOTARIUSZ



Наименование медицинского изделия

Изделия ортопедические «REN4MAT» для поддержки, коррекции или иммобилизации головы, шеи, туловища.

Варианты исполнения:

1. Ортез на шейный отдел позвоночника:

Модели:

ЕВ-КМ (размеры: S, M, L)

ЕВ-КМ (детский) (размеры: 1, 2)

ЕВ-КС (размеры: S, M, L)

АМ-КМ (размеры: S, M, L)

АМ-КС (размеры: S, M, L)

АМ-KOL-01 (размеры: универсальный)

4ARMY-KOL-01 (размеры: S, M, L)

4ARMY-KOL-02 (размеры: S, M, L)

2. Ортопедический корсет:

Модели:

MS-T-01/LSO (размеры: M, L)

MS-T-02/LSO (размеры: S, M, L)

АМ-TX-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

AR-WSP-03 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)

ЕВ-LK-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

АМ-WSK (размеры: S, M, L, XL, XXL)

ЕВ-LK-02 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

АМ-GJ-01 (размеры: S, M, L)

АМ-OK/CCA (размеры: S, M, L)

АМ-PES-06 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

AS-LK-02/CCA (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

STRADA (размеры: XS, M, L, XL, XXL)

ЕВ-LK-01/TLSO (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

АМ-WSP-03/TLSO (размеры: S, M, L, XL) в составе:

- Корсет АМ-WSP-03/TLSO
- Отвёртка

АМ-WSP-04/TLSO (размеры: S, M, L, XL) в составе:

- Корсет АМ-WSP-04/TLSO
- Отвёртка

АМ-WSP-07/TLSO (размеры: S, M, L, XL) в составе:

- Корсет АМ-WSP-07/TLSO
- Отвёртка

ОТ-01 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

ОТ-02 (размеры: универсальный)

ОТ-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

ОТ-04 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

ОТ-05 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

ОТ-06 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

ОТ-07 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

AR-SO-01 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

AR-SO-01 (детский) (размеры: 1, 2)

AR-SO-01/BEŽ (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

AR-SO-02 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AR-SO-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 EB-LK (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 EB-LK-01 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 U-LK (размеры: универсальный)
 AS-LK-02 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 AR-WSP-01 (размеры: S/M, L/XL, XXL/XXXL)
 AR-WSP-02 (размеры: S, M, L)
 AR-WSP-02/B (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-PES-01 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
 AM-PES-01 (детский) (размеры: 1, 2)
 AM-SO-01 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-SO-02 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-SO-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-SO-04 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-SO-05 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-SO-06 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-01 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
 AM-WSP-01 (детский) (размеры: 1, 2)
 AM-WSP-02 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-04 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-05 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-06 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-06 (детский) (размеры: 1, 2)
 AM-WSP-07 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AS-LK (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AS-LK-01 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
 AM-SO-07 (размеры: универсальный)
 AM-SO-08 (размеры: универсальный)
 MS-T-02/TLSO PLUS (размеры: S, M, L)
 MS-T-01/LSO PLUS (размеры: M, L)
 MS-T-02/TLSO (размеры: S, M, L)
 AM-WSP-08 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-09 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 AM-WSP-10 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 MS-T-01/TLSO PLUS (размеры: M, L)
 MS-T-01/TLSO (размеры: M, L)
 FIX-T-01 (размеры: 1, 2, 3, 4, 5)
 FIX-T-02 (размеры: 1, 2, 3)
 OT-13 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-37 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-36 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-35 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-34 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-33 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-32 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-31 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-30 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-29 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-28 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-27 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
 OT-26 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)

ОТ-25 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
ОТ-24 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
ОТ-23 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
ОТ-22 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
ОТ-18 (размеры: XS, S, M, L, XL, XXL)
4ARMY-TX-01 (размеры: S/M, L/XL, XXL/XXXL)
ОТ-09 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
ОТ-08 (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
АМ-GJ-02 (размеры: универсальный)
АМ-DPB (детский) (размеры: M, L, XL, XXL, XXXL)
АМ-DPZ (детский) (размеры: 1, 2)
ОТ-38 (размеры: универсальный)
ТВ-01 (размеры: универсальный)
PCO-T-01 (размеры: 1, 2, 3, 4, 5)
PCO-T-02 (размеры: 1, 2, 3, 4, 5)
PCO-T-03 (размеры: 1, 2, 3, 4, 5)
PCO-T-04 (размеры: 1, 2, 3, 4, 5)
PCO-T-09 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-10 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-11 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-16 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-17 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-18 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-23 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-24 (размеры: 1, 2, 3)
PCO-T-25 (размеры: 1, 2, 3)

3. Ортопедический реклинатор:

Модели:

АМ-PES-04 (размеры: универсальный)
АМ-PES-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
АМ-PES-03 (детский) (размеры: 1, 2, 3)
АМ-PES-02 (размеры: универсальный)
АМ-PES-02 (детский) (размеры: 1, 2)
АМ-TX-04 (размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
АМ-TX-05 (размеры: универсальный)
ОТ-21 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
ОТ-20 (размеры: универсальный)
ОТ-19 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
АМ-PES-08 (размеры: XS, S, M, L, XL, XXL)
АМ-PCS (размеры: универсальный)
АМ-PES-09 (размеры: универсальный)

4. Бандаж грыжевой:

Модели:

АМ-РР (размеры: S, M, L, XL, XXL)
АМ-1РР (размеры: M, L, XL, XXL)
АМ-2РР (размеры: M, L, XL, XXL)
АМ-РРВ (размеры: универсальный)
АМ-РРВ (детский) (размеры: универсальный)

5. Пояс для беременных:

Модели:

AM-PC (размеры: M, L, XL)
AM-PES-05 (размеры: универсальный)
AM-PC-02 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
AM-PC-01 (размеры: M, L, XL)
OT-10 (размеры: M, L, XL)

6. Брюшной бандаж:

Модели:

AM-OPBW (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-OPBN (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-ZPBW (размеры: S, M, L, XL, XXL)
AM-ZPBN (размеры: S, M, L, XL, XXL)
AM-APBW (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-APBN (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-PLBW (размеры: S, M, L)
AM-PLBN (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
OT-14 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
4ARMY-TX-05 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
4ARMY-TX-04 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
4ARMY-TX-02 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-SO-09 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
OT-12 14 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

7. Бандаж грудной (торакальный):

Модели:

AM-TX-02 14 (размеры: универсальный)
AM-PTM 14 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-PTD (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
OT-16 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
4ARMY-TX-03 (размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL)
AM-SO-10 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

8. Реберный бандаж:

Модели:

AM-TX-01 (размеры: S, M, L, XL, XXL)
AM-PZM (размеры: M, L)
AM-PZD (размеры: M, L)
AM-PZM-02/M (размеры: M, L)
AM-TX-10 (размеры: M, L)
OT-11 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
OT-15 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

9. Бандаж согревающий:

Модели:

ENDURO-01 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
ENDURO-02 (размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

10. Ортез для таза:

Модели:

AM-OM (размеры: M, L, XL)

Разработчик и производитель

REN4MAT Slawomir Wronski

(PEX4MAT Славомир Вронски)

ul. Piaski 47, 36-060 Glogow Malopolski, Poland

+48 16 621 42 20

biuro@reh4mat.com

Уполномоченный представитель

Общество с ограниченной ответственностью “МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС”

ООО “МЕДИКАЛ ДИСТРИБЬЮТОРС”

Россия, 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д.56, корпус 2, пом.2

8-495-565-32-02

e.bashlakov@medical-distributors.ru

Назначение

Накладываемое снаружи ортопедическое приспособление, разработанное для поддержки, выравнивания, предотвращения или коррекции деформаций/травм или иммобилизации в процессе лечения деформаций, повреждений мягких тканей, растяжений, переломов, послеоперационное восстановление функций.

Условия/область применения

Изделия ортопедические «REN4MAT» следует применять исключительно в целях ортезирования туловища или шеи

только при условии отсутствия повреждений кожи в области ее контакта с изделием.

Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями к применению.

Противопоказания

Во время использования ортеза в качестве обездвиживающей повязки (круглосуточно на протяжении 2-6 недель) – любые изменения установок необходимо согласовать с лечащим врачом. Не разрешается самостоятельно снимать ортез – можно лишь незначительно ослабить или сместить ленты

В случае наличия кожных изменений в местах прилегания (повреждения кожного покрова, ранения, экземы кожи), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Использование ортеза ограничено – но возможно после наложения повязки

Необходимо особо контролировать правильное применение ортеза согласно рекомендациям врача — у детей, людей с нарушением памяти и психически больных.

Возможные побочные действия

Слишком тесное наложение ортеза может привести к нарушению кровообращения и/или чувствительности шеи или участка туловища»

Классификация медицинского изделия

Медицинские изделия относятся к классу I в соответствии с требованиями директивы

93/42/ЕЕС. Оценка соответствия была осуществлена на основе Приложения VII Директивы

Вид контакта с организмом человека

Поверхностный контакт с кожей

Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие полностью готово к эксплуатации. В техническом обслуживании не нуждается. В случае поломки или выходу из строя необходимо обратиться к уполномоченному представителю производителя

Описание и технические характеристики медицинского изделия
Допустимые отклонения в массогабаритных размерах составляют $\pm 10\%$

ЕВ-КМ		
Общее описание Данная модель представляет собой мягкий воротник, обхватывающий массаж периметр шеи. Ортез с максимальным комфортом поддерживает анатомически правильное положение головы и шеи, снимает боль, сокращает мышечные колебания, повторяет анатомический рельеф и при этом имеет элегантный вид. Показания • при острых и длительных болевых ощущениях в области шей и плеч, вызванных травмой, перегрузкой или дегенеративными изменениями • – при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равномассаия) • - при головных болях и шуме в ушах • - при кривошеи вызванной разными причинами Технические характеристики		
S	Обхват шеи - 31-36 см	Возможная высота изделия 8,10,12 см
M	Обхват шеи - 37-42 см	
L	Обхват шеи - 43-48 см	

Габаритные размеры и масса

ЕВ-КМ Размер S	Д x Ш x Г (8 см, 25 см, 10 см). Масса 0,068 кг
ЕВ-КМ Размер M	Д x Ш x Г (10 см, 25 см, 10 см). Масса 0,070 кг
ЕВ-КМ Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 25 см, 10 см). Масса 0,076 кг

ЕВ-КМ (детский)

Общее описание

Модель ЕВ-КМ выполнена в виде воротника из комбинации трикотажа Профит и полиуретановой пены. Многослойная структура наделяет ортез следующими свойствами: Стабилизирует шейный отдел в естественно правильном положении, Эластичная структура ткани бережно обволакивает массаь периметр шеи.

Изделие фиксируется на шее ребенка с помощью эластичного ремня на липучке.

Показания

- при острых и длительных болевых ощущениях в области шей и плеч, вызванных травмой, перегрузкой или дегенеративными изменениями
- при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равномассаия)
- при головных болях и шуме в ушах
- при кривошеи вызванной разными причинами

Технические характеристики

Размер 1

Обхват шеи - 24-27 см

Возможная высота изделия - 6 см

Размер 2

Обхват шеи - 28-31 см

Возможная высота изделия – 7 см



Габаритные размеры и масса

ЕВ-КМ (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 8 см, 7см). Масса 0,031 кг
ЕВ-КМ (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (19 см, 9 см, 7см). Масса 0,034 кг

ЕВ-KS									
Общее описание Данная модель - ортопедическое средство полужесткого типа для стабилизации шейного отдела позвоночника. Изделие имеет вид объемного воротника на массаж периметр шейного отдела. Полужесткая конструкция изготовлена из комбинации ортопедического текстиля, полиуретановой пенки и полиэтиленовой пластины. Выпускается в разных размерах по ширине и высоте. Показания • при острых и длительных болевых ощущениях в области шей и плеч, вызванных травмой, перегрузкой или дегенеративными изменениями • при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равновесия) • при головных болях и шуме в ушах • при кривошеи вызванной разными причинами Технические характеристики <table> <tr> <td>S</td><td>Обхват шеи - 31-36 см</td><td rowspan="3">Возможная высота изделия 8,10,12 см</td></tr> <tr> <td>M</td><td>Обхват шеи - 37-42 см</td></tr> <tr> <td>L</td><td>Обхват шеи - 43-48 см</td></tr> </table>		S	Обхват шеи - 31-36 см	Возможная высота изделия 8,10,12 см	M	Обхват шеи - 37-42 см	L	Обхват шеи - 43-48 см	
S	Обхват шеи - 31-36 см	Возможная высота изделия 8,10,12 см							
M	Обхват шеи - 37-42 см								
L	Обхват шеи - 43-48 см								

Габаритные размеры и масса

ЕВ-KS Размер S	Д x Ш x Г (8 см, 28 см, 9 см). Масса 0,092 кг
ЕВ-KS Размер M	Д x Ш x Г (10 см, 28 см, 9 см). Масса 0,097 кг
ЕВ-KS Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 28 см, 9 см). Масса 0,101 кг

АМ-КМ									
Общее описание Воротник ортопедический типа Schanza АМ-КМ выполнен из полиуретановой пены и покрыт хлопковым ортопедическим трикотажем. Застёгивается при помощи ленты VELCRO, служащей для регулирования обхвата шеи. • Стабилизирует и разгружает позвоночник в шейном отделе, разгружает мышцы шеи. Показания и период применения в зависимости от назначения лечащего врача. Показания • После перенесенных травм шейного отдела позвоночника (вывиха, ушиба). • В периоде реабилитации после переломов шейного отдела, операций, смещения шейных позвонков • при острых и длительных болях в области шей и плеч, вызванных травмой, перегрузкой или дегенеративными изменениями • при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равновесия) • при головных болях и шуме в ушах • при кривошеи вызванной разными причинами Технические характеристики <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>Обхват шеи - 31-36 см</td><td rowspan="3">Возможная высота изделия 8,10,12 см</td></tr> <tr> <td>M</td><td>Обхват шеи - 36,5-42 см</td></tr> <tr> <td>L</td><td>Обхват шеи - 42,5-48 см</td></tr> </table>		S	Обхват шеи - 31-36 см	Возможная высота изделия 8,10,12 см	M	Обхват шеи - 36,5-42 см	L	Обхват шеи - 42,5-48 см	
S	Обхват шеи - 31-36 см	Возможная высота изделия 8,10,12 см							
M	Обхват шеи - 36,5-42 см								
L	Обхват шеи - 42,5-48 см								

Габаритные размеры и масса

АМ-КМ Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 8 см, 9 см). Масса 0,070 кг
АМ-КМ Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 10 см, 9 см). Масса 0,075 кг
АМ-КМ Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 12 см, 9 см). Масса 0,078 кг

Общее описание

Воротник ортопедический типа Schanza AM-KM выполнен из полиуретановой пены, покрытый хлопковым ортопедическим трикотажем. Застёгивается при помощи ленты VELCRO, служащей до регулирования окружности шей. Стабилизирует и разгружает позвоночник в шейном отделе, разгружает мышцы шеи. Показания и период применения в зависимости от назначения лечащего врача.

Показания

- После перенесенных травм шейного отдела позвоночника (вывиха, ушиба).
- В периоде реабилитации после переломов шейного отдела, операций, смещения шейных позвонков
- при острых и длительных болевых ощущениях в области шей и плеч, вызванных травмой, перегрузкой или дегенеративными изменениями
- при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равновесия)
- при головных болях и шуме в ушах
- при кривошеи вызванной разными причинами

Технические характеристики



S Обхват шеи - 31-36 см

M Обхват шеи - 37-42 см

L Обхват шеи - 43-48 см

Возможная высота изделия

8,10,12 см

Габаритные размеры и масса

AM-KS Размер S	Д x Ш x Г (10 см, 27 см, 9 см). Масса 0,081 кг
AM-KS Размер M	Д x Ш x Г (12 см, 27 см, 9 см). Масса 0,085 кг
AM-KS Размер L	Д x Ш x Г (13 см, 27 см, 9 см). Масса 0,088 кг

AM-KOL-01	
Общее описание Ортез AM-KOL-01 компенсирует функционирование ослабленных мышц шеи, отвечающих за поддержание головы пациента в правильном физиологическом положении. Благодаря его применению больной может лучше дышать, говорить и глотать пищу. Положительно меняется тембр голоса, улучшается невнятное произношение и исчезают нарушения дыхания. Пациент лучше видит, увереннее двигается, ему не угрожают падения при ходьбе, вызванные незаметным препятствием. Кроме того, ортез снимает углубленный цервикальный лордоз, что уменьшает болевые ощущения и парестезии остальных частей тела. Показания • Синдром падающей головы • Изолированная миопатия разгибателя спины (isolated Neck extensor myopathy, INEM). Технические характеристики Универсальное изделие с возможностью его регулировки для каждого пациента.	

Габаритные размеры и масса


AM-KOL-01 Размер универсальный	Д x Ш x Г (13 см, 27 см, 9 см). Масса 0,086 кг
--------------------------------	--

4ARMY-KOL-01	
Общее описание Мягкий воротник Шанца, был сделан из соответственно подобранной и анатомически сформированной полиуретановой пены, и усиленного эластичного трикотажа типа Пантера. Воротник Шанца имеет новый анатомический крой, а его конструкция дополнительно усилена. Продукт стабилизирует и разгружает позвоночник в шейном отделе, а также снимает напряжение с мышц шеи. Воротник доступен в трех размерах и трех высотах, что позволяет легко подобрать ортез для каждого пациента. Показания • болезненность шеи • повышенное напряжение мышц шеи • дископатия шейного отдела позвоночника	

Технические характеристики		
S	Обхват шеи - 31-36 см	Возможная высота изделия 8,10,12 см
M	Обхват шеи - 37-42 см	
L	Обхват шеи - 43-48 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-KOL-01 Размер S	Д x Ш x Г (8 см, 25 см, 8 см). Масса 0.065 кг
4ARMY-KOL-01 Размер M	Д x Ш x Г (10 см, 26 см, 8 см). Масса 0.070 кг
4ARMY-KOL-01 Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 27 см, 8 см). Масса 0.074 кг

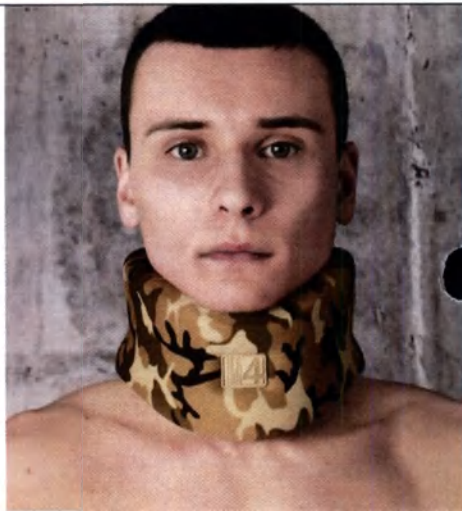4ARMY-KOL-02		
Общее описание Полужесткий воротник типа Florida выполнен из правильно подобранной полиэтиленовой плиты, отделанной полиуретановой пеной и усиленной эластичной трикотажной тканью типа pantera. Воротник Florida 4ARMY-KOL-02 имеет новый анатомический крой, а его конструкция дополнительно усилена. Продукт стабилизирует и разгружает позвоночник в шейном отделе, а также снимает напряжение с мышц шеи. Воротник доступен в трех размерах и трех высотах, что позволяет легко подобрать ортез для каждого пациента. Показания • болезненность шеи • повышенное напряжение мышц шеи • дископатия шейного отдела позвоночника Технические характеристики		
S	Обхват шеи - 31-36 см	
M	Обхват шеи - 37-42 см	
L	Обхват шеи - 43-48 см	

Габаритные размеры и масса

4ARMY-KOL-02 Размер S	Д x Ш x Г (8 см, 25 см, 8 см). Вес 0,0803кг
4ARMY-KOL-02 Размер M	Д x Ш x Г (10 см, 26 см, 8 см). Вес 0,0807кг
4ARMY-KOL-02 Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 27 см, 8 см). Вес 0,0815кг

MS-T-01/LSO

Общее описание

Представляет собой очень надежный рамный корсет пояснично-крестцового отдела позвоночника с регулировкой высоты и окружности. Диапазон стабилизации корсета MS-T-01/LSO от 9 грудного позвонка (Th9) до 5 поясничного позвонка (L5). Передняя часть корсета не охватывает грудную клетку, таким образом не затрудняет дыхание. Четыре эластичные боковины из пластика ABS хорошо адаптируются к телу, стабилизируют позвоночник в сагиттальной плоскости.



Показания

- острые боли в области пояснично-крестцовой и грудной,
- дископатия многоуровневая
- нестабильность позвоночника
- поясничный спондилолистез
- ишиас
- опухоли позвоночника
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и торакальном отделе
- после операции (ортопедия, нейрохирургия)
- после снятия иммобилизации в пояснично-крестцовом и грудном отделе в качестве стабилизатора
- некоторые дефекты осанки

Технические характеристики

M	Обхват в поясе	Расстояние от Th9 до копчика - 31-34 см
L	65-145 см	Расстояние от Th9 до копчика - 38-41 см

Габаритные размеры и масса

MS-T-01/LSO Размер M	Д x Ш x Г (40 см, 50 см, 9 см). Масса 1,057 кг
MS-T-01/LSO Размер L	Д x Ш x Г (43 см, 52 см, 9 см). Масса 1,171 кг

MS-T-02/LSO

Общее описание

Представляет собой очень надежный рамный корсет пояснично-крестцового отдела позвоночника с регулировкой высоты и окружности. Диапазон стабилизации корсета MS-T-02/LSO от 1 (L1) до 5 поясничного позвонка (L5). Конструкция адаптируется для данного пациента и его заболевания, простая регулировка и удобство использования.

Показания

- острые боли в области пояснично-крестцового отдела,
- дископатия многоуровневая
- нестабильность позвоночника
- болезнь Шейермана
- Болезнь Паркинсона, спондилит (АС)
- поясничный спондилолистез
- ишиас
- опухоли позвоночника
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и торакальном отделе
- после операции (ортопедия, нейрохирургия)
- после снятия иммобилизации в пояснично-крестцовом и грудном отделе в качестве стабилизатора
- некоторые дефекты осанки.



Технические характеристики

S	Обхват талии	Высота от ручки грудины до лонного сочленения - 41-49 см
M	65-145 см	Высота от ручки грудины до лонного сочленения - 47-55 см
L		Высота от ручки грудины до лонного сочленения - 53-61 см

Габаритные размеры и масса

MS-T-02/LSO Размер S	Д x Ш x Г (54 см, 60 см, 4 см). Масса 0,613 кг
MS-T-02/LSO Размер M	Д x Ш x Г (56 см, 62 см, 4 см). Масса 0,627 кг
MS-T-02/LSO Размер L	Д x Ш x Г (58 см, 64 см, 4 см). Масса 0,644 кг

АМ-ТХ-03

Общее описание

Пояснично-крестцовый ортез АМ-ТХ-03 имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и стабилизирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Сзади установлены 4 профилированные ортопедические вставки из пластика. Они имеют точно ограниченную степень эластичности. Застежки спереди, в новый асимметричный способ, позволяющий лучше адаптировать ортез к телу. Кроме того, есть 2 набора эластичных затяжных ремней, улучшающих стабилизацию позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и уровень компрессии изделия.



Показания

- болевые синдромы пояснично-крестцового отдела позвоночника,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в области поясницы,
- деформация позвоночника в поясничной области,
- спондилолистез в поясничной области,
- перегрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ТХ-03 Размер S	Д x Ш x Г (55 см, 30 см, 3 см). Масса 0,653 кг
АМ-ТХ-03 Размер M	Д x Ш x Г (56 см, 30 см, 3 см). Масса 0,561 кг
АМ-ТХ-03 Размер L	Д x Ш x Г (57 см, 33 см, 3 см). Масса 0,600 кг
АМ-ТХ-03 Размер XL	Д x Ш x Г (58 см, 33 см, 3 см). Масса 0,654 кг
АМ-ТХ-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (59 см, 33 см, 3 см). Масса 0,668 кг
АМ-ТХ-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (60 см, 33 см, 3 см). Масса 0,675 кг

Общее описание

Ортез состоит из двух независимых элементов, имеющих анатомическую форму. Благодаря такой конструкции ортез адаптируется к любой фигуре. В задней части есть крепления для установки жесткой поясничной или пояснично-крестцовой пелоты, а в передней части — карман для установки брюшной пелоты. Ортез можно носить как с брюшной пелотой, так и без нее.

В качестве стабилизирующего элемента применен широкий неэластичный пояс, динамически регулирующий сжатие в пояснично-крестцовой части ортеза.

Показания

- острой болевой синдромов пояснично-крестцового и грудного отделов,
- многоуровневой дископатии,
- остеопороза,
- нестабильности позвоночника,
- поясничного спондилолистеза,
- компрессионный перелом позвоночника с остеопорозом (после консультации с врачом)
- радикулит,
- дегенерация позвоночника в эпизоде пояснично-крестцовом и грудном отделе,
- после операции (ортопедия, нейрохирургия),
- после снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовом и грудном отделе в качестве стабилизатора,
- некоторые дефекты осанки.

Технические характеристики

Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

**Габаритные размеры и масса**

AR-WSP-03 Размер М	Д x Ш x Г (46 см, 44 см, 14 см). Масса 0,813 кг
AR-WSP-03 Размер L	Д x Ш x Г (48 см, 44 см, 14 см). Масса 0,824 кг
AR-WSP-03 Размер XL	Д x Ш x Г (48 см, 46 см, 14 см). Масса 0,849 кг
AR-WSP-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (48 см, 48 см, 14 см). Масса 0,876 кг
AR-WSP-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (50 см, 50 см, 14 см). Масса 0,905 кг

Общее описание

Орtez пояснично-крестцовый имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и стабилизирует позвоночник. Сзади установлены 4 ортопедические вставки из пластика. Они имеют точно ограниченный степень эластичности. Они принимают на себя часть нагрузки, снимая ее с позвоночника и спинальных мышц. Застежки спереди, в новый асимметричный способ, позволяющий лучше адаптировать ортез к телу в одном размере. Кроме того, есть 2 набора эластичных затяжных ремней, улучшающих стабилизацию и компрессию.

Показания

- болевые синдромы крестцового отдела позвоночника,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в области поясницы,
- деформация позвоночника в поясничной области,
- спондилолистез в поясничной области,
- перегрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см



Габаритные размеры и масса

ЕВ-LK-03 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 30 см, 3 см). Масса 0,307 кг
ЕВ-LK-03 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 31 см, 3 см). Масса 0,321 кг
ЕВ-LK-03 Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 32 см, 3 см). Масса 0,335 кг
ЕВ-LK-03 Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 33 см, 3 см). Масса 0,349 кг
ЕВ-LK-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (25 см, 34 см, 3 см). Масса 0,366 кг
ЕВ-LK-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (25 см, 35 см, 3 см). Масса 0,387 кг

Общее описание

Высокий корсет позвоночника корсет ограничивает движение в пострадавшей области, принимает на себя нагрузку тем самым снимая нагрузку с мышц. Задняя часть имеет анатомическую форму и две алюминиевые ортопедические шины позвоночника, а также 6 поясничных пластиковых планшетонок. Наружный слой ткани имеет свойства липучки, что позволяет застегивать ремни в нужном месте и делает корсет очень универсальным. Корсет имеет жесткие плечевые ремни с системой регулировки длины (примерить и отрезать). После примерки изделия лишняя часть ремней отрезается.

Показания

- резкие боли в пояснично-крестцовом отделе,
- многоуровневая дископатия,
- остеопороз,
- нестабильность позвоночника,
- поясничный спондилолистез,
- компрессионные переломы позвоночника на фоне остеопороза (после предварительной консультации с врачом),
- пояснично-крестцовый радикулит,
- дегенерация позвоночника в отделах пояснично-крестцовом и грудном
- после операций (ортопедия, нейрохирургия).

Технические характеристики

S	Обхват в поясе мин 65 см — макс 125 см	Расстояние от Th3 до копчика - 45-48 см
M		Расстояние от Th3 до копчика - 48,5-51 см
L	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см	Расстояние от Th3 до копчика - 51,5-54 см
XL		Расстояние от Th3 до копчика - 54,5-57 см
XXL		Расстояние от Th3 до копчика - 57,5-60 см и более

**Габаритные размеры и масса**

AM-WSK Размер S	Д х Ш х Г (57 см, 24 см, 3 см). Масса 0,656 кг
AM-WSK Размер M	Д х Ш х Г (58 см, 25 см, 3 см). Масса 0,669 кг
AM-WSK Размер L	Д х Ш х Г (59 см, 26 см, 3 см). Масса 0,684 кг
AM-WSK Размер XL	Д х Ш х Г (60 см, 27 см, 3 см). Масса 0,701 кг
AM-WSK Размер XXL	Д х Ш х Г (61 см, 28 см, 3 см). Масса 0,723 кг

Общее описание

Жесткая поясничная опора выполнена из алюминия и оснащена неэластичными фиксирующими ремнями. Данная часть изделия используется при необходимости максимально сильно ограничить подвижность и стабилизировать позвоночник. На следующем этапе используется более щадящая опора – полужесткая. При изготовлении данной опоры используется каучуковая планка и эластичные ленты. На последнем этапе реабилитации используется корсет без дополнений.

Показания

- при острых и хронических болевых синдромах позвоночника и крестцово-подвздошных суставов, вызванных дископатией, спондилоидозом, дегенеративными изменениями и другими болезненными процессами
- при острых и хронических корневых болевых синдромах (ишиас, бедренная кость)
- после перенесенных травм (растяжений, переломов позвоночника, травм мышц спины и живота) лечат консервативно и оперативно
- после переломов патологических позвонков (например, при остеопорозе, онкологических заболеваниях)
- после перенесенных травм или перегрузок (слишком интенсивных тренировок или тяжелой физической работы) мышцы живота и спины
- для вертикализации и обучения ходьбе у пациентов, получавших лечение по ортопедическим и неврологическим причинам

**Технические характеристики**

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

ЕВ-LK-02 Размер S	Д x Ш x Г (38 см, 38 см, 4 см). Масса 0,736 кг
ЕВ-LK-02 Размер M	Д x Ш x Г (38 см, 40 см, 4 см). Масса 0,753 кг
ЕВ-LK-02 Размер L	Д x Ш x Г (38 см, 42 см, 4 см). Масса 0,771 кг

ЕВ-LK-02 Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 44 см, 4 см). Масса 0,795 кг
ЕВ-LK-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (38 см, 46 см, 4 см). Масса 0,821 кг
ЕВ-LK-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (38 см, 48 см, 4 см). Масса 0,847 кг

AM-GJ-01			
Общее описание Экстенсивный груднопоясничный корсет Reh4Mat Jewett Am-gj-01 оказывает стабилизирующее воздействие на позвоночник методом постоянного вытяжения по сагиттальной плоскости. В состав конструкции входят: • Жесткая рама из алюминия, покрытого медицинским ламинатом, что позволяет носить корсет на голое тело. • Пояснично -грудная пелота, обеспечивающая стабилизацию выполнена из пластика. • Фиксирующие элементы – натяжная скоба и эластичные ремни позволяют подобрать индивидуальную степень прижимания. Показания • Компрессионные переломы позвонков • Деформация позвонков в связи • Болезни Бехтерева и Шейермана • Туберкулез позвоночника • Остеопороз Технические характеристики			
Размер S	Размер M		Размер L
Высота от ручки грудины до лонного сочленения	Высота от ручки грудины до лонного сочленения		Высота от ручки грудины до лонного сочленения
37-44 см	41-48 см	45-52 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-GJ-01 Размер S	Д x Ш x Г (48 см, 38 см, 13 см). Масса 0,947 кг
АМ-GJ-01 Размер M	Д x Ш x Г (49 см, 39 см, 13 см). Масса 0,980 кг
АМ-GJ-01 Размер L	Д x Ш x Г (50 см, 40 см, 13 см). Масса 1,015 кг

АМ-ОК/ССА		
Общее описание Основная особенность данного ортеза –минимальный объем при максимальной прочности. Ячеистая структура из синтетических волокон отлично вентилируется, сохраняя естественный микроклимат кожи. Малый масса и тончайшая ткань позволяет использовать изделие длительное время с максимальным комфортом. Бандаж АМ-ОК/ССА снимает болевой синдром, поддерживает анатомически правильное положение суставов и отлично разгружает бедренно - поясничные суставы. Показания • Блокада крестцово - подвздошных сочленений • Артроз • Болевой синдром в мышцах малого таза • Нестабильность суставов • Перелом крестца и др. Технические характеристики		
Размер S	Размер М	
Обхват в бедрах	Обхват в бедрах	Размер L
94-102 см	102-110 см	Обхват в бедрах
		110-118 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОК/ССА Размер S	Д х Ш х Г (10 см, 25 см, 5 см). Масса 0,139 кг
АМ-ОК/ССА Размер М	Д х Ш х Г (12 см, 25 см, 5 см). Масса 0,146 кг
АМ-ОК/ССА Размер L	Д х Ш х Г (14 см, 25 см, 5 см). Масса 0,155 кг

АМ-PES-06	
Общее описание Ортез позвоночника АМ-PES-06 имеет анатомические упругие вставки для поддержки позвоночника в правильном положении. Конструкция ортеза и лямки выполняют роль корректора осанки, способствующего постоянному правильному положению тела. Показания • остеопоротические переломы позвоночника • деформация позвонков • острые боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, • многоуровневая дископатия, • нестабильность позвоночника, • спондилез, • ишиас,	
	

• дегенерация позвоночника в отделах пояснично-крестцовом и грудном, • после операций (ортопедия, нейрохирургия).					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см
Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высота
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

AM-PES-06 Размер S	Д x Ш x Г (60 см, 40 см, 4 см). Масса 0,568 кг
AM-PES-06 Размер M	Д x Ш x Г (61 см, 41 см, 4 см). Масса 0,585 кг
AM-PES-06 Размер L	Д x Ш x Г (62 см, 41 см, 4 см). Масса 0,603 кг
AM-PES-06 Размер XL	Д x Ш x Г (63 см, 42 см, 4 см). Масса 0,619 кг
AM-PES-06 Размер XXL	Д x Ш x Г (63 см, 42 см, 4 см). Масса 0,639 кг
AM-PES-06 Размер XXXL	Д x Ш x Г (64 см, 43 см, 4 см). Масса 0,661 кг

AS-LK-02/CCA	
Общее описание Стабилизирующе-разгружающий пояснично-крестцовый ортез АХЕ помогает уменьшить боль и предотвращает растяжение. Эффективно стабилизирует и хорошо разгружает позвоночник в пояснично-крестцовом отделе, снимает нагрузки и фиксирует поясницу, а также защищает мышцы и суставы от растяжений. Показания • После разрыва мышц живота и спины, вызванных травмой или перегрузкой, • Для людей со слабыми мышцами живота, выполняющих тяжелую физическую работу и физические нагрузки, • При хронических болевых синдромах поясничного отдела позвоночника. Технические характеристики	

Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
75-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AS-LK-02/CCA Размер M	Д x Ш x Г (22.5 см, 38 см, 4 см). Масса 0,372 кг
AS-LK-02/CCA Размер L	Д x Ш x Г (23 см, 39 см, 4 см). Масса 0,385 кг
AS-LK-02/CCA Размер XL	Д x Ш x Г (23.5 см, 40 см, 4 см). Масса 0,400 кг
AS-LK-02/CCA Размер 2XL	Д x Ш x Г (24 см, 41 см, 4 см). Масса 0,417 кг
AS-LK-02/CCA Размер 3XL	Д x Ш x Г (24.5 см, 42 см, 4 см). Масса 0,436 кг

STRADA

Общее описание

Ортез STRADA стабилизирует позвоночник при переломах позвонков, поддерживает ослабленные мышцы туловища. Шины анатомически адаптированы к индивидуальной кривизне позвоночника. Стабилизирующие ремни не растягиваются, а передние застежки сделаны так, чтобы их было легко застегивать. Вследствие уменьшения болей улучшаются физические возможности пациента, Типическая у пациентов с остеопорозом тенденция к шатанию уменьшается, что уменьшает риск падений и травм.

Показания

- остеопоротические переломы позвоночника
- деформированные позвонки
- острые боли в пояснично-крестцовом отделе
- многоуровневая дископатия
- нестабильность позвоночника
- поясничный спондилолистез
- ишиас
- дегенеративные патологии в пояснично-



крестцовом и торакальном отделе • после операции (ортопедия, нейрохирургия). Технические характеристики			
XS	Обхват в поясе мин 65 см — макс 125 см	Расстояние от Th3 до копчика - 42-45 см	
S		Расстояние от Th3 до копчика - 45,5-48 см	
M		Расстояние от Th3 до копчика - 48,5-51 см	
L	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см	Расстояние от Th3 до копчика - 51,5-54 см	
XL		Расстояние от Th3 до копчика - 54,5-57 см	
XXL		Расстояние от Th3 до копчика - 57,5-60 см и более	

Габаритные размеры и масса

STRADA Размер XS	Д x Ш x Г (60 см, 29 см, 7 см). Масса 0,703 кг
STRADA Размер S	Д x Ш x Г (60 см, 30 см, 7 см). Масса 0,717 кг
STRADA Размер M	Д x Ш x Г (62 см, 31 см, 7 см). Масса 0,734 кг
STRADA Размер L	Д x Ш x Г (62 см, 32 см, 7 см). Масса 0,755 кг
STRADA Размер XL	Д x Ш x Г (64 см, 33 см, 7 см). Масса 0,776 кг
STRADA Размер XXL	Д x Ш x Г (64 см, 34 см, 7 см). Масса 0,798 кг

ЕВ-LK-01/TLSO	
Общее описание Корсет туловища ЕВ-LK-01/TLSO имеет анатомическую форму, хорошо прилегает к телу и хорошо стабилизирует грудной, пояснично-крестцовый отдел позвоночника. В задней части корсета есть 2 ортопедические вставки, которые имеют строго заданную эластичность. Застегивается спереди в ассиметричный способ. Кроме того, есть 2 набора эластичных ремней для затяжки, которые улучшают стабилизацию позвоночника и обеспечивают нужную компрессию.	
Показания • болевые синдромы в пояснично-крестцовом и грудном отделе,	

• многоуровневая дископатия, • остеопороз, • Небольшая нестабильность позвоночника, • спондилолистез поясничного отдела, • ишиас, • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и грудном отделе, • Некоторые дефекты осанки.					
Технические характеристики					
Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75-85 см	Размер L Обхват талии 85-97 см	Размер XL Обхват талии 97-110 см	Размер XXL Обхват талии 110-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125-145 см
Высота - 44 см					

Габаритные размеры и масса

ЕВ-LK-01/TLSO Размер S	Д x Ш x Г (56 см, 30 см, 3 см). Масса 0,637 кг
ЕВ-LK-01/TLSO Размер M	Д x Ш x Г (58 см, 31 см, 3 см). Масса 0,655 кг
ЕВ-LK-01/TLSO Размер L	Д x Ш x Г (58 см, 32 см, 3 см). Масса 0,678 кг
ЕВ-LK-01/TLSO Размер XL	Д x Ш x Г (62 см, 33 см, 3 см). Масса 0,703 кг
ЕВ-LK-01/TLSO Размер XXL	Д x Ш x Г (62 см, 34 см, 3 см). Масса 0,734 кг
ЕВ-LK-01/TLSO Размер XXXL	Д x Ш x Г (64 см, 35 см, 3 см). Масса 0,761 кг

AM-WSP-03/TLSO

Общее описание

Корсет AM-WSP-03 / TLSO изготовлен из высококачественного алюминия и стали и дополнительно защищен от вредного воздействия пота, долговечным порошковым покрытием. Корсет отлично стабилизирует позвоночник, а жесткие подтяжки предотвращают его боковое сгибание. Регулировка изделия производится с помощью одной отвертки, которая входит в комплект к корсету AM-WSP-03/TLSO. Двухшинный динамический стабилизатор позвоночника имеет функцию разгрузки позвоночника и стабилизирует его, не влияя на его костную систему.

Показания

- Компрессионный перелом (остеопоротический)



Технические характеристики

Размер S	Окружность бедер 5 см ниже пупка (B) мин 80 см – макс 145 см	Ширина подмышек 27-33 см	Высота от вертела 23-37 см
Размер M		Ширина подмышек 29-36 см	Высота от вертела 26-40 см
Размер L		Ширина подмышек 33-41 см	Высота от вертела 31-44 см
Размер XL		Ширина подмышек 36-43 см	Высота от вертела 34-46 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-03/TLSO Размер S	Д x Ш x Г (52 см, 41 см, 21 см). Масса 0,921 кг
AM-WSP-03/TLSO Размер M	Д x Ш x Г (53 см, 41 см, 21 см). Масса 0,937 кг
AM-WSP-03/TLSO Размер L	Д x Ш x Г (54 см, 41 см, 21 см). Масса 0,964 кг
AM-WSP-03/TLSO Размер XL	Д x Ш x Г (55 см, 41 см, 21 см). Масса 0,975 кг

AM-WSP-04/TLSO

Общее описание

Динамический корсет туловища AM-WSP-04/TLSO – медицинское ортопедическое изделие, которое стабилизирует позвоночник по фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях. Данная модель представляет собой сложную конструкцию из комбинации жестких элементов и специального многоуровневого текстиля. Корсетная основа – жесткий каркас удерживает анатомически правильное положение, компенсирует нагрузку на позвоночник и ограничивает подвижность. Такие характеристики позволяют максимально эффективно ускорить процесс выздоровления. Регулировка изделия производится с помощью одной отвертки, которая входит в комплект к корсету AM-WSP-04/TLSO

Показания

- Сколиоз
- Вывихи и трещины
- Переломы
- Реабилитация после операций
- остеопороз

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
обхват бедер 5 см ниже пупка	обхват бедер 5 см ниже пупка	обхват бедер 5 см ниже пупка	обхват бедер 5 см ниже пупка
80-145 см	90-145 см	95-145 см	100-145 см
ширина под подмышками	ширина под подмышками	ширина под подмышками	ширина под подмышками
27-33 см	29-36 см	33-41 см	36-43 см
высота от вертела	высота от вертела	высота от вертела	высота от вертела
23-37 см	26-40 см	31-44 см	34-46 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-04/TLSO Размер S	Д x Ш x Г (51 см, 40 см, 30 см). Масса 1,254 кг
AM-WSP-04/TLSO Размер M	Д x Ш x Г (51 см, 42 см, 30 см). Масса 1,286 кг
AM-WSP-04/TLSO Размер L	Д x Ш x Г (51 см, 44 см, 30 см). Масса 1,322 кг
AM-WSP-04/TLSO Размер XL	Д x Ш x Г (51 см, 46 см, 30 см). Масса 1,361 кг

AM-WSP-07/TLSO

Общее описание

Корсет AM-WSP-07 / TLSO изготовлен из высококачественного алюминия и стали и дополнительно защищен от вредного воздействия пота, долговечным порошковым покрытием. Корсет отлично стабилизирует позвоночник, а жесткие подмышки предотвращают его боковое сгибание. Регулировка изделия производится с помощью одной прилагаемой к корсету отвертки AM-WSP-07 / TLSO.

Показания

- Компрессионный перелом (остеопороз)
- Раздавленный перелом позвоночника
- сгибательный и прямой перелом
- деформации позвоночника (сколиоз)

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL
Окружность бедер 5 см ниже пупка	Окружность бедер 5 см ниже пупка	Окружность бедер 5 см ниже пупка	Окружность бедер 5 см ниже пупка
85-145 см	95-145 см	100-145 см	105-145 см
Ширина подмышек	Ширина подмышек	Ширина подмышек	Ширина подмышек
27-33 см	29-36 см	33-41 см	36-43 см
Высота от вертела	Высота от вертела	Высота от вертела	Высота от вертела
23-37 см	26-40 см	31-44 см	34-46 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-07/TLSO Размер S	Д x Ш x Г (60 см, 47 см, 28 см). Масса 0,902 кг
AM-WSP-07/TLSO Размер M	Д x Ш x Г (62 см, 49 см, 28 см). Масса 0,947 кг
AM-WSP-07/TLSO Размер L	Д x Ш x Г (64 см, 49 см, 28 см). Масса 1,011 кг
AM-WSP-07/TLSO Размер XL	Д x Ш x Г (66 см, 50 см, 28 см). Масса 1,086 кг

ОТ-01

Общее описание

Орtez ОТ-01 применяется, когда не требуется сильная стабилизация поясницы. Этот ортез имеет поддерживающее действие, а не полностью стабилизирующее. Уменьшает и предотвращает болевые ощущения, улучшает двигательные возможности пациента. Сзади применен материал, который отличается неэластичностью, благодаря чему хорошо подходит для стабилизации. Также сзади установлены в зависимости от размера 4 или 6 ортопедических вставок. Застежки ортеза асимметрические что позволяет лучше подогнать его к телу пациента.



Показания

- острые болевые синдромы в пояснично-крестцовой области,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом сегменте,
- дископатия в поясничной области,
- после хирургических операций поясничного отдела позвоночника,
- деформация позвоночника в поясничной области,
- перегрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-01 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,187 кг
ОТ-01 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,193 кг
ОТ-01 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,198 кг
ОТ-01 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,203 кг
ОТ-01 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,209 кг
ОТ-01 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,221 кг

ОТ-02**Общее описание**

Ортез имеет специальную анатомическую форму, прекрасно адаптируется к анатомии пользователя и не скользит во время повышенной физической активности. Пояс для туловища ОТ-02 по всей его поверхности имеет функцию натяжения, поэтому идеально подойдет к любой фигуре. Плавная регулировка сжатия позволяет активно контролировать температуру тела, что делает тренировки намного эффективнее.

Показания

- интенсивная спортивная тренировка (ABS-тренировка, кросс-фит, фитнес)
- избыточный масса
- болевые синдромы в поясничном и крестцовом отделах
- перегрузка поясничного и крестцового отделов
- защита внутренних органов при езде на мотоцикле / велосипеде.

Технические характеристики**Размер универсальный**

Окружность талии - мин 65 см - макс 100 см

X-Size

Окружность талии - мин 100,5 см - макс 130 см

**Габаритные размеры и масса**

ОТ-02 Размер универсальный	Д x Ш x Г (28 см, 40 см, 6 см). Масса 0,322 кг
ОТ-02 Размер X-Size	Д x Ш x Г (43 см, 45 см, 6 см). Масса 0,476 кг

ОТ-03**Общее описание**

Ортез выполнен в соответствии с новой более анатомической формой, благодаря чему изделие лучше подходит к любой фигуре и намного лучше стабилизирует поясничный отдел позвоночника. Специфика этого сырья заключается в том, что он не эластичный, что улучшает стабилизацию позвоночника. В задней части ортеза установлены, в зависимости от размера, четыре или шесть ортопедических косточек, которые идеально подстраиваются под тело пациента. В изделии используются съемные затяжные ленты, так что этот ортез может работать двухступенчато. В период возникновения сильной боли следует использовать полное изделие



Показания • острые болевые синдромы в пояснично-крестцовом отделе, • дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • Поясничная дископатия, • после операций поясничного отдела позвоночника, • деформация позвоночника в поясничном отделе, • перегрузка пояснично-крестцового отдела.					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-03 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 32 см, 6 см). Масса 0,237 кг
ОТ-03 Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 34 см, 6 см). Масса 0,243 кг
ОТ-03 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 36 см, 6 см). Масса 0,248 кг
ОТ-03 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 38 см, 6 см). Масса 0,254 кг
ОТ-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 40 см, 6 см). Масса 0,262 кг
ОТ-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (28 см, 42 см, 6 см). Масса 0,271 кг

ОТ-04	
Общее описание Анатомический крой корсета позволяет ему идеально прилегать к телу пациента и, соответственно, лучше стабилизировать позвоночник в грудном, поясничном и крестцовом отделах. Благодаря ремням под подмышки в грудной части, удалось достичь полной переднезадней стабилизации всего позвоночника. В задней части в зависимости от размера устанавливаются 2 или 4 ортопедические вставки и высокий алюминиевый корпус. Вставки имеют точно заданную упругость благодаря закалке. Они имеют порошковое покрытие для защиты от воздействия пота. Застегивание выполнено в новый асимметричный способ. Это позволяет лучше адаптировать корсет к телу. Кроме того, установлены 2 набора двойных эластичных ремней для затягивания, которые улучшают стабилизацию пояснично-	

крестцового отдела. Показания • острые боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника • дископатия • остеопороз • нестабильность позвоночника • поясничный спондилолистез • компрессионные переломы позвоночника с остеопорозом (после предварительной консультации с врачом) • радикулит • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и грудном отделе • после операции (ортопедия, нейрохирургия).					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см
Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высот
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-04 Размер S	Д x Ш x Г (60 см, 42 см, 5 см). Масса 0,665 кг
ОТ-04 Размер M	Д x Ш x Г (58 см, 43 см, 5 см). Масса 0,683 кг
ОТ-04 Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 44 см, 5 см). Масса 0,700 кг
ОТ-04 Размер XL	Д x Ш x Г (62 см, 45 см, 5 см). Масса 0,721 кг
ОТ-04 Размер XXL	Д x Ш x Г (64 см, 46 см, 5 см). Масса 0,742 кг
ОТ-04 Размер XXXL	Д x Ш x Г (66 см, 47 см, 5 см). Масса 0,764 кг

Общее описание

Высокий ортез крестцово-пояснично-грудной с подмышками принадлежит к группе 4Classic и был создан нами таким образом, чтобы повысить его эксплуатационные качества, улучшить его функциональность, диапазон стабилизации и комфорт использования. Дополнительным преимуществом является возможность регулировки высоты стойки позвоночника. В задней части ортеза были установлены в зависимости от размера; две или четыре ортопедические вставки и высокая алюминиевая стойка для позвоночника. Стойка позвоночника – это отдельный элемент ортеза, который очень легко отделяется от него, чтобы установить правильную высоту ортеза.



Показания

- острые болевые синдромы в пояснично-крестцовом отделе,
- многоуровневая дископатия,
- остеопороз,
- нестабильность позвоночника,
- поясничный спондилез,
- компрессионный перелом позвоночника на остеопоротическом фоне (после предварительной консультации с врачом),
- ишиас,
- дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом и грудном отделах,
- после оперативных процедур (ортопедия, нейрохирургия).

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см
Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высота
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-05 Размер S	Д x Ш x Г (21 см, 40 см, 3 см). Масса 0,477 кг
ОТ-05 Размер M	Д x Ш x Г (21 см, 41 см, 3 см). Масса 0,491 кг
ОТ-05 Размер L	Д x Ш x Г (21 см, 42 см, 3 см). Масса 0,504 кг
ОТ-05 Размер XL	Д x Ш x Г (21 см, 43 см, 3 см). Масса 0,518 кг

ОТ-05 Размер XXL	Д х Ш х Г (21 см, 44 см, 3 см). Масса 0,532 кг
ОТ-05 Размер XXXL	Д х Ш х Г (21 см, 45 см, 3 см). Масса 0,549 кг

Количество ортопедических вставок

ОТ-05 Размер S	2 шт. ортопедических вставок и высокий алюминиевый каркас для позвоночника
ОТ-05 Размер M	2 шт. ортопедических вставок и высокий алюминиевый каркас для позвоночника
ОТ-05 Размер L	2 шт. ортопедических вставок и высокий алюминиевый каркас для позвоночника
ОТ-05 Размер XL	4 шт. ортопедических вставок и высокий алюминиевый каркас для позвоночника
ОТ-05 Размер XXL	4 шт. ортопедических вставок и высокий алюминиевый каркас для позвоночника
ОТ-05 Размер XXXL	4 шт. ортопедических вставок и высокий алюминиевый каркас для позвоночника

ОТ-06

Общее описание

Орtez имеет анатомическую форму, что позволяет использовать его на любой фигуре. В зависимости от размера, в задней части имеется 4 или 6 анатомических ортопедических шин. Устройство оснащено съемными ремешками и работает в два этапа. Во время сильной боли необходимо носить полную версию ортеза, но, когда боль уменьшается, вы можете снять ремни, что снижает уровень стабилизации и делает ортез легче и комфортнее. Застежка асимметричная. Такое решение позволяет подогнать ортез к корпусу в пределах одного размера. Ортез ОТ-06 благодаря анатомическим шинам стабилизирует и поддерживает позвоночник в поясничной части. Поддерживает брюшную стенку и обладает обезболивающими свойствами благодаря компрессии и постоянной температуре. Бандаж улучшает подвижность, уменьшает и предотвращает боль и повышает качество жизни.

Показания

- острые болевые синдромы в пояснично-



крестцовом отделе, • дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • Поясничная дископатия, • после операций поясничного отдела позвоночника, • деформация позвоночника в поясничном отделе, • перегрузка пояснично-крестцового отдела.					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-06 Размер S	Д х Ш х Г (33 см, 32 см, 4 см). Масса 0,316 кг
ОТ-06 Размер M	Д х Ш х Г (33 см, 34 см, 4 см). Масса 0,324 кг
ОТ-06 Размер L	Д х Ш х Г (33 см, 36 см, 4 см). Масса 0,349 кг
ОТ-06 Размер XL	Д х Ш х Г (33 см, 40 см, 4 см). Масса 0,373 кг
ОТ-06 Размер XXL	Д х Ш х Г (33 см, 42 см, 4 см). Масса 0,397 кг
ОТ-06 Размер XXXL	Д х Ш х Г (33 см, 44 см, 4 см). Масса 0,425 кг

Количество ортопедических вставок

ОТ-06 Размер S	4 шт. ортопедических вставок
ОТ-06 Размер M	4 шт. ортопедических вставок
ОТ-06 Размер L	6 шт. ортопедических вставок
ОТ-06 Размер XL	6 шт. ортопедических вставок
ОТ-06 Размер XXL	6 шт. ортопедических вставок
ОТ-06 Размер XXXL	6 шт. ортопедических вставок

Общее описание

Орtez стабилизирует и разгружает позвоночник в нижнем грудном и пояснично-крестцовых отделах, стабилизирует крестцово-бедренные суставы; укрепляет стенку мышц живота, согревает. Изготовлен из высококачественного эластичного дышащего материала, идеально подходит для тела пациента, система упругих элементов укрепляет ортез. Уменьшает возникающие болевые ощущения, препятствует их возникновению, улучшает двигательную работоспособность пациента.

Показания

- при острых и хронических болевых синдромах позвоночника и крестцово-подвздошных суставов, вызванных дископатией, спондилоидозом, дегенеративными изменениями и другими болезненными процессами
- при острых и хронических болевых синдромах (ишиас, бедренная кость)
- после перенесенных травм (растяжений, переломов позвоночника, травм мышц спины и живота) лечат консервативно и оперативно
- после переломов патологических позвонков (например, при остеопорозе, онкологических заболеваниях)
- после перенесенных травм или перегрузок (слишком интенсивных тренировок или тяжелой физической работы) мышц живота и спины
- для вертикализации и обучения ходьбе у пациентов, получавших лечение по ортопедическим и неврологическим причинам
- снижает риск развития грыж в послеоперационных рубцах.



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии	Окружность талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-07 Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 40 см, 7 см). Масса 0,302 кг
ОТ-07 Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 40 см, 7 см). Масса 0,321 кг
ОТ-07 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 42 см, 7 см). Масса 0,353 кг
ОТ-07 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 42 см, 7 см). Масса 0,385 кг

ОТ-07 Размер XXL	Д х Ш х Г (30 см, 44 см, 7 см). Масса 0,418 кг
ОТ-07 Размер XXXL	Д х Ш х Г (32 см, 44 см, 7 см). Масса 0,451 кг

AR-SO-01					
Общее описание Орtez позвоночника AR-SO-01 нужно применять во время повышенной активности при хронических или длительных болях позвоночника. Ежедневная активность, такая как стояния, приседание, поднятие тяжестей или сгибание создают нагрузки на позвоночник. Применение ортеза AR-SO-01 с анатомическими алюминиевыми вставками позволяет перенести воздействие сил с позвоночника на металлические вставки. Благодаря этому, диски, связки и мышцы позвоночника принимают на себя значительно меньшие нагрузки. Показания • боль в пояснице • травмы позвоночника • перегрузка нижних отделов позвоночника • неправильная осанка • беременность • артроз • дископатия • ишиас • после операций отдела L-S Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2L	Размер 3L
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AR-SO-01 Размер S	Д х Ш х Г (25 см, 38 см, 6 см). Масса 0,393 кг
AR-SO-01 Размер M	Д х Ш х Г (26 см, 39 см, 6 см). Масса 0,306 кг
AR-SO-01 Размер L	Д х Ш х Г (27 см, 40 см, 6 см). Масса 0,315 кг
AR-SO-01 Размер XL	Д х Ш х Г (28 см, 41 см, 6 см). Масса 0,324 кг
AR-SO-01 Размер 2L	Д х Ш х Г (29 см, 42 см, 6 см). Масса 0,335 кг
AR-SO-01 Размер 3L	Д х Ш х Г (30 см, 43 см, 6 см). Масса 0,346 кг

AR-SO-01 (детский)

Общее описание

Низкий ортопедический бандаж укрепляющий пояснично-крестцовый отдел позвоночника, изготовлен из легкой хлопчатой ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать. Ортез оснащен комплектом эластичных ортопедических вкладышей. Модель изготовлена из инновационного ортопедического текстиля – прорезиненное хлопковое волокно, который обеспечивает бандаж следующими свойствами:

- Односторонняя эластичность,
- Циркуляция воздуха,
- Микромассажный эффект,
- Эффективная стабилизация.

Показания

- острых комплексных болей в пояснично-крестцовой области,
- дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатии в области поясницы,
- после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия),
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора,
- деформации поясничного отдела позвоночника.
- смещения позвонков в поясничном отделе
- перенапряжения пояснично-крестцового отдела

Технические характеристики

РАЗМЕР 1

Обхват талии - 50-60 см

РАЗМЕР 2

Обхват талии - 60,5-70 см



Габаритные размеры и масса

AR-SO-01 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (18 см, 14 см, 3 см). Масса 0,114 кг
AR-SO-01 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (20 см, 16 см, 3 см). Масса 0,127 кг

Общее описание

Ортез позвоночника AR-SO-01 нужно применять во время повышенной активности при хронических или длительных болях позвоночника. Ежедневная активность, такая как стояния, приседание, поднятие тяжестей или сгибание создают нагрузки на позвоночник. Применение ортеза с анатомическими алюминиевыми вставками позволяет перенести воздействие сил с позвоночника на металлические вставки. Благодаря этому, диски, связки и мышцы позвоночника принимают на себя значительно меньшие нагрузки.

Показания

- боль в пояснице
- травмы позвоночника
- перегрузка нижних отделов позвоночника
- неправильная осанка
- беременность
- артроз
- дископатия
- ишиас
- после операций отдела L-S

**Технические характеристики**

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2L	Размер 3L
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AR-SO-01/BEŽ Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 38 см, 6 см). Масса 0,393 кг
AR-SO-01/BEŽ Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 39 см, 6 см). Масса 0,306 кг
AR-SO-01/BEŽ Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 40 см, 6 см). Масса 0,315 кг
AR-SO-01/BEŽ Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 41 см, 6 см). Масса 0,324 кг
AR-SO-01/BEŽ Размер 2L	Д x Ш x Г (29 см, 42 см, 6 см). Масса 0,335 кг
AR-SO-01/BEŽ Размер 3L	Д x Ш x Г (30 см, 43 см, 6 см). Масса 0,346 кг

AR-SO-02

Общее описание

Ортез AR-SO-02 характеризуется очень сильной круговой стабилизацией, в задней части имеется 4 анатомические ортопедические вставки, а благодаря гибким зажимным лентам она идеально подходит для тела пациента. Задняя часть ортеза изготовлена из гибкой ортопедической резины, которая оснащена специальными отверстиями для обеспечения вентиляции и облегчения удаления пота с тела пациента.

Показания

- При острых комплексных болях в пояснично-крестцовой области,
- дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатии в области поясницы,
- после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия),
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора,
- деформации поясничного отдела позвоночника.
- смещения позвонков в поясничном отделе
- перенапряжения пояснично-крестцового отдела.



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AR-SO-02 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 36 см, 5 см). Масса 0,296 кг
AR-SO-02 Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 38 см, 5 см). Масса 0,309 кг
AR-SO-02 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 40 см, 5 см). Масса 0,323 кг
AR-SO-02 Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 42 см, 5 см). Масса 0,338 кг
AR-SO-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 44 см, 5 см). Масса 0,354 кг
AR-SO-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 46 см, 5 см). Масса 0,371 кг

Общее описание

Низкий полужёсткий ортез выполнен из лёгкой, хлопковой ортопедической резины позволяющей коже свободно дышать. В пояснично-крестцовом отделе размещены ортопедические вкладыши, а также поясничная пластина. Применение в бандаже ортопедических вкладышей и регулируемой поясничной пластинки позволило сделать совершенной фиксацию и уменьшением нагрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника. В передней части бандаж закреплён дополнительный затягивающийся пояс, который предупреждает не контролируемое расстегивание, и, следовательно, повышает безопасность и комфорт его использования.

**Показания**

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела,
- артрита позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия поясничного отдела,
- после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия),
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор,
- деформации позвоночника в поясничном отделе,
- смещению позвонков в поясничном отделе,
- состояния перегрузки пояснично-крестцового отдела.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

AR-SO-03 Размер S	Д x Ш x Г (29 см, 38 см, 5 см). Масса 0,397 кг
AR-SO-03 Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 40 см, 5 см). Масса 0,408 кг
AR-SO-03 Размер L	Д x Ш x Г (29 см, 42 см, 5 см). Масса 0,421 кг
AR-SO-03 Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 44 см, 5 см). Масса 0,433 кг
AR-SO-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (29 см, 46 см, 5 см). Масса 0,446 кг
AR-SO-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (29 см, 48 см, 5 см). Масса 0,459 кг

ЕВ-LK

Общее описание

Орtez выполнен из комбинации медицинского текстиля и укреплен жесткими стабилизирующими компонентами. Орtez легко накладывается и снимается с помощью клапана на липучке (Велкро). Для пациентов с ограниченными возможностями рук предусмотрены текстильные ленты для удобства наложения.

Показания

При острых и хронических болевых синдромах позвоночника и крестцово-бедренных суставов, вызванных дископатией, дегенеративными изменениями и другими болезненными процессами. При острых и хронических болевых корневых синдромах (пояснично-крестцовый, бедренный радикулит). После консервативного и хирургического лечения травм позвоночника в поясничной области. После травм или перегрузки (слишком интенсивные тренировки или тяжелая физическая работа) мышц живота и спины. Профилактически для людей, начинающих интенсивную спортивную тренировку (особенно в первый период) или выполняющих тяжелую физическую работу при слабых мышцах живота. Для вертикализации и учения ходьбе у больных ортопедического и неврологического отделов.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

ЕВ-LK Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 36 см, 2 см). Масса 0,425 кг
ЕВ-LK Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 38 см, 2 см). Масса 0,442 кг
ЕВ-LK Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 40 см, 2 см). Масса 0,456 кг
ЕВ-LK Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 42 см, 2 см). Масса 0,483 кг
ЕВ-LK Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 44 см, 2 см). Масса 0,497 кг
ЕВ-LK Размер XXXL	Д x Ш x Г (34 см, 46 см, 2 см). Масса 0,419 кг

Общее описание

Одна из разновидностей высоких поясничных ортезов серии ЕВ-LK – модель ЕВ-LK-01. Особенностью данного изделия является неэластичные ленты – ремни. Ортез удерживает позвонки в естественно правильном положении, ограничивает подвижность, компенсирует нагрузку и полностью стабилизирует позвоночник в области крестца, поясницы и спины, практически до лопаток. Изделие выполнено в виде корсета из медицинского текстиля и укреплено жесткими/полужесткими элементами.

Показания

При острых и хронических болевых синдромах позвоночника и крестцово-бедренных суставов, вызванных дископатией, спондилолистеза, дегенеративными изменениями и другими болезненными процессами

- При острых и хронических болевых корневых синдромах (пояснично-крестцовый, бедренный радикулит).
- После консервативного и хирургического лечения травм (растяжения, переломы позвоночника, повреждения мышц спины и живота).
- После переломов патологических дисков (например, при остеопорозе, онкологических заболеваниях)
- После травм или перегрузки мышц живота и спины (из-за слишком интенсивных тренировок или тяжелой физической работы).
- Для вертикализации и учения ходьбе у больных ортопедического и неврологического отделов.
- Профилактически при занятиях спортом или для лиц, выполняющих тяжелую физическую работу.

Технические характеристики



Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер М Обхват талии 75-85 см	Размер L Обхват талии 85-97 см	Размер XL Обхват талии 97-110 см	Размер XXL Обхват талии 110-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125-145 см
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---

Габаритные размеры и масса

ЕВ-LK-01 Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 31 см, 4 см). Масса 0,378 кг
ЕВ-LK-01 Размер М	Д x Ш x Г (33 см, 35 см, 4 см). Масса 0,399 кг
ЕВ-LK-01 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 37 см, 4 см). Масса 0,417 кг
ЕВ-LK-01 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 39 см, 4 см). Масса 0,435 кг
ЕВ-LK-01 Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 41 см, 4 см). Масса 0,454 кг
ЕВ-LK-01 Размер XXXL	Д x Ш x Г (34 см, 43 см, 4 см). Масса 0,477 кг

U-LK

Общее описание

Бандаж ортопедический U-LK относится группе 4CLASSIC, универсальное безразмерное изделие. Конструкция ортеза учитывает специфику телосложения и обеспечивает максимальный комфорт использования, делает возможным неограниченную свободу движения как женщинам, так и мужчинам. Стабилизирует поясничный отдел позвоночника благодаря поддержанию мышц живота; Он обогрывает.

Показания

- после перенесенных травм или перегрузках (слишком интенсивных тренировок или тяжёлой физической нагрузки) мышц живота и спины
- при длительных болевых симптомах поясничного отдела позвоночника
- профилактически у людей начинающих интенсивную тренировку (особенно в первоначальном периоде) или выполняющих физическую нагрузку со слабыми мышцами живота
- может исполнять защитную функцию в контактных видах спорта

Технические характеристики

Размер универсальный

Обхват в поясе - мин 65 см — макс 100 см

X-Size - мин 100,5 см — макс 130 см



Габаритные размеры и масса

U-LK Размер универсальный	Д x Ш x Г (30 см, 56 см, 3 см). Масса 0,736 кг
U-LK Размер X-Size	Д x Ш x Г (35 см, 61 см, 3 см). Масса 0,797 кг

AS-LK-02

Общее описание

Пояснично-крестцовый бандаж STEFDA помогает уменьшить боли внизу спины и предотвращает мышечные спазмы. Ортез AS-LK-02 состоит из двух независимых элементов анатомической формы, так что бандаж лучше адаптируется к фигуре пациента, а свободное пространство между частями вентилирует пояснично-крестцовый отдел хребта. Сзади есть эластичные карманы, в которых можно установить поясничные пелоты из специальной пенки. Бандаж можно носить с пелотами и без них.



Показания

- растяжение брюшных и поясничных мышц
- при физической активности в качестве поддержки поясничного отдела позвоночника и мышц
- при хронических болях в пояснице.

Технические характеристики

Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

AS-LK-02 Размер М	Д x Ш x Г (24 см, 42 см, 5 см). Масса 0,469 кг
AS-LK-02 Размер L	Д x Ш x Г (24 см, 44 см, 5 см). Масса 0,488 кг
AS-LK-02 Размер XL	Д x Ш x Г (24 см, 48 см, 5 см). Масса 0,470 кг
AS-LK-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (24 см, 48 см, 5 см). Масса 0,491 кг
AS-LK-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (24 см, 50 см, 5 см). Масса 0,513 кг

AR-WSP-01

Общее описание

Корсет туловища предназначен для быстрого наложения после операции или травмы. Очень хорошо подходит в качестве поддержки при хронических и длительных заболеваниях позвоночника. В изделии имеется легкая в установке система грудных пелот с ремнями и подтяжками. Так как поверхность изделия позволяет пристегивать детали на «липучки», а излишки ремней можно отрезать — этот ортез среди лидеров на рынке по возможностям конфигурации. Пелоты поддерживают грудной отдел позвоночника. Их применяют на первых этапах использования изделия, выполняя функцию TLSO.



Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов
- при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника
- дископатия поясничного отдела,
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор.
- **Технические характеристики**

Размер S/M

Обхват талии

65-85 см

Размер L/XL

Обхват талии

85-110 см

Размер XXL/XXXL

Обхват талии

110-145 см

Габаритные размеры и масса

AR-WSP-01 Размер S/M	Д x Ш x Г (55 см, 33 см, 8 см). Масса 1,282 кг
AR-WSP-01 Размер L/XL	Д x Ш x Г (57 см, 35 см, 8 см). Масса 1,432 кг
AR-WSP-01 Размер XXL/XXXL	Д x Ш x Г (59 см, 37 см, 8 см). Масса 1,582 кг

AR-WSP-02

Общее описание

Корсет туловища AR-WSP-02 предназначен для послеоперационной иммобилизации или быстрой иммобилизации после травмы. Идеально подходит для защиты туловища при длительных заболеваниях позвоночника. Корсет контролирует и уменьшает острую боль, связанную с аномалиями и травмами позвоночника, такими как: остеопороз, компрессионные переломы, сужения, кифоз и т.п. Уменьшает боль в спине и прекрасно показывает себя как защита до и после операции. Корсет AR-WSP-02 имеет три функции, позволяет во время выздоровления после травмы или операции снимать отдельные элементы для постепенного уменьшения защиты и стабилизации. Модульная конструкция очень важна при реабилитации, благодаря ей минимизируется дистрофия мышц.



Показания

- После переломов в позвоночнике
- После операции (ортопедия, нейрохирургия)
- Остеопоротические переломы позвоночника
- Деформации позвонков
- Острые боли в пояснично-крестцовом отделе
- Дископатия многоуровневая
- Нестабильность позвоночника
- Поясничный спондилолистез
- Ишиас
- Дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и грудном отделе.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L
Высота от ручки грудины до лонного сочленения	Высота от ручки грудины до лонного сочленения	Высота от ручки грудины до лонного сочленения
42-60 см	50-67 см	57-74 см
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-85 см	85,5-110 см	110,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AR-WSP-02 Размер S	Д x Ш x Г (60 см, 46 см, 4 см). Масса 1,651 кг
AR-WSP-02 Размер M	Д x Ш x Г (61 см, 48 см, 4 см). Масса 1,846 кг
AR-WSP-02 Размер L	Д x Ш x Г (62 см, 50 см, 4 см). Масса 2,046 кг

AR-WSP-02/B

Общее описание

Корсет AR-WSP-02/B спроектирован с учетом анатомии, поэтому точно прилегает к любой фигуре и эффективно стабилизирует груднопоясничный отдел позвоночника. В задней части корсета установлены 4 ортопедических планшеты, которые имеют точно заданный уровень эластичности и порошковое покрытие для защиты от пота. В передней части — 2 эластичные вставки стабилизирующие переднюю часть корсета. Корсет застегивается спереди асимметрично, чтобы лучше адаптироваться к телу пациента. Кроме того, имеются 2 набора затяжных ремней, которые улучшают стабилизацию груднопоясничного отдела позвоночника и задают нужную компрессию.

Показания

- боли груднопоясничного отдела позвоночника,
- дегенерация позвоночника в груднопоясничном отделе,
- дископатия в груднопоясничном отделе,
- деформация позвоночника в груднопоясничном отделе,
- спондилолистез в груднопоясничном отделе,
- перегрузки груднопоясничного отдела позвоночника.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см



Габаритные размеры и масса

AR-WSP-02/B Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 31 см, 3 см). Масса 0,442 кг
AR-WSP-02/B Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 33 см, 3 см). Масса 0,456 кг
AR-WSP-02/B Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 35 см, 3 см). Масса 0,469 кг
AR-WSP-02/B Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 37 см, 3 см). Масса 0,482 кг
AR-WSP-02/B Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 39 см, 3 см). Масса 0,496 кг
AR-WSP-02/B Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 41 см, 3 см). Масса 0,511 кг

АМ-PES-01

Общее описание

Ортез выполнен из эластичных лент и спинной накладке над хребтом, снабжённой четырьмя упругими ортопедическими планшетами. Спинная накладка соединена с эластичными плечевыми лентами, которые проходят через плечо и скрещиваются в области поясничного отдела и застегиваются на животе. Такая конструкция изделия гарантирует идеальное исправление осанки как у взрослых, так и у детей. Специальная конструкция плечевых лент способствует тому, что они не морщатся и прилегают всей своей поверхностью к телу пациента.



Показания

- Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
- болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
- увеличенного грудного кифоза,
- необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
70 — 80 см	80,5 — 90 см	90,5 — 100 см	100,5 — 125 см	125,5 — 140 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-01 Размер S	Д x Ш x Г (35 см, 20 см, 2 см). Масса 0,224 кг
АМ-PES-01 Размер M	Д x Ш x Г (36 см, 21 см, 2 см). Масса 0,235 кг
АМ-PES-01 Размер L	Д x Ш x Г (37 см, 22 см, 2 см). Масса 0,243 кг
АМ-PES-01 Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 23 см, 2 см). Масса 0,252 кг
АМ-PES-01 Размер XXL	Д x Ш x Г (39 см, 24 см, 2 см). Масса 0,264 кг

АМ-PES-01 (детский)

Общее описание

Данная модель используется для коррекции грудного отдела хребта и плечевых суставов у детей. Изделие представляет собой текстильную эластичную основу в виде лент. На спине закреплены упругие элементы – ортопедические накладки, которые в щадящем режиме поддерживают осанку в естественно правильном положении. Корректор рекомендован к использованию по назначению врача. Подобрать размер и правильно наложить корректор в первый раз, желательно с помощью медицинского сотрудника, чтобы избежать последствий передавливания брюшной полости или грудной клетки.



Показания

- Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
- болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
- увеличенного грудного кифоза,
- необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

Технические характеристики

РАЗМЕР 1

Обхват грудной клетки - 45-50 см

РАЗМЕР 2

Обхват грудной клетки - 50-60 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-01 (детский) Размер	Д x Ш x Г (25 см, 15 см, 2 см). Масса 0,123 кг
АМ-PES-01 (детский) Размер	Д x Ш x Г (27 см, 16 см, 2 см). Масса 0,138 кг

АМ-SO-01

Общее описание

Ортез изготовлен в новой более анатомической форме, благодаря чему лучше прилегает к фигуре и значительно лучше стабилизирует поясничный отдел позвоночника. В задней части ортеза, в зависимости от размера, установлены четыре или шесть анатомически профилированных вставок и пластиковая поясничная пластинка. Вставки имеют строго ограниченную упругость и защиту от воздействия пота. Застежки бандажа имеют новую ассиметричную форму. Спереди дополнительно имеются специальные лямки для



ладоней, облегчающие одевание бандажа пациентам с ограниченными возможностями и дисфункциями верхних конечностей.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела,
- дегенеративных изменений позвоночника в поясничном отделе
- дископатия поясничного отдела,
- после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия),
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор,
- деформации позвоночника в поясничном отделе.
- смещению позвонков в поясничном отделе
- состояния перегрузки пояснично-крестцового отдела

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-SO-01 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 35 см, 3 см). Масса 0,272 кг
AM-SO-01 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 37 см, 3 см). Масса 0,272 кг
AM-SO-01 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 39 см, 3 см). Масса 0,272 кг
AM-SO-01 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 41 см, 3 см). Масса 0,281 кг
AM-SO-01 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 43 см, 3 см). Масса 0,292 кг
AM-SO-01 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 45 см, 3 см). Масса 0,305 кг

AM-SO-02

Общее описание

Орtez на пояснично-крестцовую область позвоночника AM-SO-02 представляет собой корсет из ортопедического текстиля с ортопедическими вкладышами и эластичными перекрещивающимися лентами. Практичная модель эффективно стабилизирует позвоночник и компенсирует нагрузку. Скрещенные эластичные ленты идеально поддерживают, защищают и фиксируют пояснично-крестцовую область



позвоночника, что способствует скорейшему восстановлению. Показания • При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела, • артрита позвоночника в пояснично-крестцовом отделе • дископатия поясничного отдела, • после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия), • после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор, • деформации позвоночника в поясничном отделе, • смещению позвонков в поясничном отделе, • состояния перегрузки пояснично-крестцового отдела. Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-SO-02 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 34 см, 4 см). Масса 0,358 кг
AM-SO-02 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 4 см). Масса 0,369 кг
AM-SO-02 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 38 см, 4 см). Масса 0,380 кг
AM-SO-02 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 40 см, 4 см). Масса 0,391 кг
AM-SO-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 42 см, 4 см). Масса 0,403 кг
AM-SO-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 44 см, 4 см). Масса 0,416 кг

Общее описание

Низкий полужесткий ортез изготовлен из легкой хлопковой ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать. В пояснично-крестцовой области находятся ортопедические вкладыши и поясничная пелота. Применение в ортезе ортопедических вкладышей и регулируемой поясничной пелоты дает отличную стабилизацию, укрепление и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. В передней части шнуровки прикреплена дополнительная сжимающая лента, которая предохраняет случайное расстегивание ортеза и вместе с тем увеличивает безопасность и комфорт использования изделия.



Показания

- при острых комплексных болях в пояснично-крестцовой области,
- дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатии в области поясницы,
- после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия),
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора,
- деформации поясничного отдела позвоночника.
- смещения позвонков в поясничном отделе
- перенапряжения пояснично-крестцового отдела

Технические характеристики

Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125,5-145 см
--------------------------------------	--	--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

AM-SO-03 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 26 см, 2 см). Масса 0,347 кг
AM-SO-03 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 27 см, 2 см). Масса 0,363 кг
AM-SO-03 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 28 см, 2 см). Масса 0,380 кг
AM-SO-03 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 29 см, 2 см). Масса 0,398 кг
AM-SO-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 30 см, 2 см). Масса 0,416 кг
AM-SO-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 31 см, 2 см). Масса 0,434 кг

Общее описание

Ортез пояснично-крестцовый выполнен из лёгкой, хлопковой ортопедической резины позволяющей коже свободно дышать. Снабжен четырьмя профилируемыми ортопедическими вкладышами и двумя эластичными затягивающимися стабилизирующими поясами, которые регулируют силу и высоту фиксации. Стабилизирует пояснично-бедренный сустав и нижний отдел позвоночника L4-L5-S1. Он уменьшает болевые симптомы, предотвращает их появлению, улучшает двигательную чёткость пациента. Опционально, мужской поясничная ортез может быть оснащен поддерживающими подтяжки, которые стабилизируют продукт на теле пациента во время упражнений, физической работы или занятий спортом.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела,
- артрита позвоночника в пояснично-крестцовом отделе
- дископатия поясничного отдела,
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор,
- деформации позвоночника в поясничном отделе.
- смещению позвонков в поясничном отделе
- состояния перегрузки пояснично-крестцового отдела.

Технические характеристики

Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125,5-145 см
--------------------------------------	--	--	--	--	---



Габаритные размеры и масса

AM-SO-04 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 4 см). Масса 0,364 кг
AM-SO-04 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 38 см, 4 см). Масса 0,386 кг
AM-SO-04 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 40 см, 4 см). Масса 0,411 кг
AM-SO-04 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 42 см, 4 см). Масса 0,433 кг
AM-SO-04 Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 44 см, 4 см). Масса 0,459 кг
AM-SO-04 Размер XXXL	Д x Ш x Г (28 см, 46 см, 4 см). Масса 0,481 кг

Общее описание

Этот ортез выполняет более поддерживающую функцию чем стабилизирующую. Уменьшает возникающие боли, предотвращает их возникновение, улучшает подвижность пациента. Снабжен комплектом не профилируемых ортопедических вкладышей и эластичным затягивающимся поясом, стабилизирующим вкладыши и делающий возможным точное подбирание изделия. Стабилизирует пояснично-бедренный сустав и нижний отдел позвоночника L4-L5-S1. Он уменьшает болевые симптомы, предотвращает их появлению, улучшает двигательную чёткость пациента.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела
- артрита позвоночника в пояснично-крестцовом отделе
- дископатия поясничного отдела
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор
- деформации позвоночника в поясничном отделе
- смещению позвонков в поясничном отделе
- состояния перегрузки пояснично-крестцового отдела.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см



Габаритные размеры и масса

AM-SO-05 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 35 см, 4 см). Масса 0,185 кг
AM-SO-05 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 37 см, 4 см). Масса 0,192 кг
AM-SO-05 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 39 см, 4 см). Масса 0,203 кг
AM-SO-05 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 41 см, 4 см). Масса 0,209 кг
AM-SO-05 Размер XXL	Д x Ш x Г (29 см, 43 см, 4 см). Масса 0,220 кг
AM-SO-05 Размер XXXL	Д x Ш x Г (29 см, 45 см, 4 см). Масса 0,229 кг

Общее описание

Орtez оснащен комплектом профилированных ортопедических вкладышей и двумя перекрестными эластичными сжимающими лентами, которые стабилизируют ортопедические вкладыши и регулируют силу и высоту стабилизации. Сзади установлены, в зависимости от размера, четыре или шесть ортопедических вкладышей анатомической формы. Они имеют точно заданную степень эластичности благодаря специальной закалке, а также имеют порошковое покрытие, защищающее от действия пота. Передняя часть ортеза раздельная, с четырьмя независимыми застежками. Они изнутри имеют хлопчатый трикотаж, с другой стороны прочный ламинат с липучками. Раздельная конструкция ортеза облегчает подгонку по разной фигуре пациентов.



Показания

- острых комплексных болей в пояснично-крестцовой области,
- дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатии в области поясницы,
- после операций поясничного отдела позвоночника,
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора,
- деформации поясничного отдела позвоночника.
- перенапряжения пояснично-крестцового отдела.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-SO-06 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 41 см, 5 см). Масса 0,423 кг
AM-SO-06 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 43 см, 5 см). Масса 0,435 кг
AM-SO-06 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 45 см, 5 см). Масса 0,448 кг
AM-SO-06 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 47 см, 5 см). Масса 0,461 кг
AM-SO-06 Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 49 см, 5 см). Масса 0,474 кг
AM-SO-06 Размер XXXL	Д x Ш x Г (30 см, 51 см, 5 см). Масса 0,487 кг

AM-WSP-01

Общее описание

Ортез с анатомическими алюминиевыми вставками позволяет перенести воздействие сил с позвоночника на металлические вставки. Благодаря этому, диски, связки и мышцы позвоночника принимают на себя значительно меньшие нагрузки. Внешний слой ортеза создан из спандекса, отвечает за нужную компрессию и прилегание изделия, уменьшает подергивание мышц во время физических усилий. Внутренний слой из микрофибры, хлопка и эластана отвечает за поддержку надлежащего микроклимата и отвод пота, он очень мягкий. Позволяет коже свободно дышать.



Показания

- боль в пояснице
- травмы нижней части спины / переломы
- растяжение в нижней части спины
- плохая осанка
- беременность
- артрит
- грыжа межпозвоночного диска
- ишиас
- после операций.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL	Размер 4XL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см	145,5-155 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-01 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 46 см, 5 см). Масса 0,388 кг
AM-WSP-01 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 48 см, 5 см). Масса 0,397 кг
AM-WSP-01 Размер L	Д x Ш x Г (32 см, 40 см, 5 см). Масса 0,409 кг
AM-WSP-01 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 42 см, 5 см). Масса 0,417 кг
AM-WSP-01 Размер 2XL	Д x Ш x Г (32 см, 44 см, 5 см). Масса 0,426 кг
AM-WSP-01 Размер 3XL	Д x Ш x Г (32 см, 46 см, 5 см). Масса 0,434 кг
AM-WSP-01 Размер 4XL	Д x Ш x Г (34 см, 48 см, 5 см). Масса 0,449 кг

АМ-WSP-01 (детский)	
Общее описание Модель АМ-WSP-01- эффективное ортопедическое средство, применяемое для поддержания позвоночника в анатомически правильном положении. Конструкция состоит из: Эластичной текстильной базы, металлических ортопедических вставок, эластичных ремней с фиксацией ВЕЛКРО (липучкой). Бандаж прост и комфортен в применении. Из-за малого массаа и мягкой структуры, детям будет удобно в повседневной жизни, что заметно скажется на сроке восстановления. Показания • При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела, • артрита позвоночника в пояснично-крестцовом отделе • дископатия поясничного отдела, • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор Технические характеристики	
Размер 1 Обхват талии - 50-60 см	Размер 2 Обхват талии - 60,5-70 см

Габаритные размеры и масса

АМ-WSP-01 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (22 см, 14 см, 3 см). Масса 0,091 кг
АМ-WSP-01 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (24 см, 15 см, 3 см). Масса 0,1 кг

Общее описание

Высокий полужесткий бандаж с подмышками и дополнительной жесткостью выполнен из лёгкой хлопковой ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать, и полиуретановой пенки покрытой поверхностной тканью. В поясничном и грудном отделах бандаж снабжен профилируемыми ортопедическими вставками, покрытыми горячим способом порошкообразным лаком. Этот способ защищает от коррозии, вкладыши устойчивы к поту и соли, не пачкают изделие и одежду, а также устойчивы к деформациям. Утягивающие ленты дополнительно подгоняют бандаж к телу пациента и увеличивают натиск и стабильность ортопедических вкладышей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов,
- нестабильности позвоночника,
- после переломов позвоночника на фоне остеопороза (при предварительной консультации с врачом),
- дископатия поясничного отдела,
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор,
- на фоне ишиаса,
- при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника,
- при остеопорозе,
- при нарушении осанки.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см
Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высота
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-02 Размер S	Д x Ш x Г (54 см, 29,5 см, 4 см). Масса 0,630 кг
AM-WSP-02 Размер M	Д x Ш x Г (57 см, 34,5 см, 4 см). Масса 0,700 кг
AM-WSP-02 Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 40 см, 4 см). Масса 0,778 кг

AM-WSP-02 Размер XL	Д x Ш x Г (62 см, 45,5 см, 4 см). Масса 0,856 кг
AM-WSP-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (64 см, 52 см, 4 см). Масса 0,941 кг
AM-WSP-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (66 см, 59 см, 4 см). Масса 1,036 кг

AM-WSP-03

Общее описание

Пояснично-крестцовый ортез AM-WSP-03 изготовлен из неэластичных материалов, оснащен боковой системой шнуровки, благодаря чему его функциональность, диапазон стабилизации и удобство использования значительно улучшены. В поясничном отделе ортез снабжен профилируемыми ортопедическими вставками, покрытыми горячим порошкообразным покрытием. Этот способ защищает от коррозии, вкладыши становятся устойчивы к поту и соли, не пачкают изделие и одежду, а также устойчивы к деформациям. Использование ортопедических вкладышей такого типа оптимально стабилизирует и укрепляет пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Утягивающие ленты дополнительно подгоняют бандаж к телу пациента и увеличивают натиск и стабильность ортопедических вкладышей.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов.
- деформации позвоночника в поясничном отделе
- дископатии поясничного отдела,
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор,
- при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника
- при вывихах поясничного отдела
- при перегрузках пояснично-крестцово отдела позвоночника.



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-03 Размер S	Д x Ш x Г (29 см, 33 см, 3 см). Масса 0,491 кг
AM-WSP-03 Размер M	Д x Ш x Г (29 см, 38,5 см, 3 см). Масса 0,528 кг

AM-WSP-03 Размер L	Д x Ш x Г (29 см, 45 см, 3 см). Масса 0,568 кг
AM-WSP-03 Размер XL	Д x Ш x Г (32 см, 51,5 см, 3 см). Масса 0,648 кг
AM-WSP-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 58,5 см, 3 см). Масса 0,693 кг
AM-WSP-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (35 см, 66,5 см, 3 см). Масса 0,790 кг

AM-WSP-04						
Общее описание Мужской пояснично-грудной ортез AM-WSP-04 с подтягивающими ремнями, был изготовлен в соответствии с новой, более анатомической формой, благодаря которой продукт лучше адаптируется к каждой фигуре и намного лучше стабилизирует пояснично-грудной отдел позвоночника. Изделие очень комфортно для кожи пациента – бандаж выполнен из специальной ортопедической резины состоящей главным образом из хлопка, которая нейтральна для кожи пациента. Большая эффективность стабилизации — благодаря применению анатомически смоделированных ортопедических вкладышей, а также подбору оптимальной формы удалось получить исключительную фиксацию. Благодаря небольшому массе изделия пациент чувствует себя комфортно. Показания • При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов • дископатия поясничного отдела • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор • дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника • деформаций позвоночного столба. Технические характеристики						
Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125,5-145 см	

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-04 Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 30,5 см, 4 см). Масса 0,460 кг
AM-WSP-04 Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 35 см, 4 см). Масса 0,511 кг

AM-WSP-04 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 41 см, 4 см). Масса 0,568 кг
AM-WSP-04 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 47 см, 4 см). Масса 0,625 кг
AM-WSP-04 Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 53 см, 4 см). Масса 0,687 кг
AM-WSP-04 Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 60,5 см, 4 см). Масса 0,756 кг

AM-WSP-05					
Общее описание Ортез пояснично-крестцово-грудного отдела с нахлестом на ключичную область выполнен из легкой сетчатой ортопедической резины, снабжен профилированными ортопедическими вкладышами в пояснично-крестцово-грудном отделе, а также лентами, стабилизирующими ключичную область. Особенно рекомендуется при болях поясницы. При согласии пациента является оптимальным вариантом при переломах позвоночника, в случае остеопороза и при болезни Шейермана. Характеризуется высокой степенью стабилизации и безопасностью использования, комфортом и удобством. Показания • При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов • нестабильности позвоночника • после переломов позвоночника на фоне остеопороза (при предварительной консультации с врачом) • дископатия поясничного отдела • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор • на фоне ишиаса • при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника • при остеопорозе. Технические характеристики					
Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-05 Размер S	Д x Ш x Г (48 см, 33 см, 3 см). Масса 0,595 кг
AM-WSP-05 Размер M	Д x Ш x Г (51 см, 38,5 см, 3 см). Масса 0,692 кг
AM-WSP-05 Размер L	Д x Ш x Г (58 см, 45 см, 3 см). Масса 0,805 кг
AM-WSP-05 Размер XL	Д x Ш x Г (59 см, 51,5 см, 3 см). Масса 0,886 кг

	кг
AM-WSP-05 Размер XXL	Д x Ш x Г (60 см, 58,5 см, 3 см). Масса 0,974 кг
AM-WSP-05 Размер XXXL	Д x Ш x Г (60 см, 66,5 см, 3 см). Масса 1,071 кг

AM-WSP-06					
Общее описание Состоящий из двух частей бандаж пояснично-крестцово-грудного отдела с нахлестом на ключичную область выполнен из легкой ортопедической резины, снабжен профилированными ортопедическими вкладышами-планшетками в пояснично-крестцово-грудном отделе, а также лентами, стабилизирующими ключичную область. По мере необходимости можно использовать только пояснично-крестцовую часть бандажа. Показания • вывих суставов большого пальца кисти (выбитый большой палец) • растяжение большого пальца кисти • травмы боковых связок пястно-фалангового сустава первого пальца (например, большой палец лыжника) • воспаление в области большого пальца • повреждение сухожилий большого пальца • переломы в области большого пальца • ревматические изменения в большом пальце кисти • травма лучезапястного сустава Технические характеристики ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ РАЗМЕРОВ ИЗ ТАБЛИЦ 1 И 2					
Размер S Расстояние от Th3 до копчика 45-48 см	Размер M Расстояние от Th3 до копчика 48,5-51 см	Размер L Расстояние от Th3 до копчика 51,5-54 см	Размер XL Расстояние от Th3 до копчика 54,5-57 см	Размер XXL Расстояние от Th3 до копчика 57,5-60 см и более	Размер XXXL Расстояние от Th3 до копчика 57,5-60 см и более
Размер S Обхват в поясе 65-75 см	Размер M Обхват в поясе 75,5-85 см	Размер L Обхват в поясе 85,5-97 см	Размер XL Обхват в поясе 97,5-110 см	Размер XXL Обхват в поясе 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват в поясе 125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-06 Размер S	Д x Ш x Г (54 см, 22 см, 5 см). Масса 0,626 кг
AM-WSP-06 Размер M	Д x Ш x Г (57 см, 26 см, 5 см). Масса 0,728 кг
AM-WSP-06 Размер L	Д x Ш x Г (60 см, 30 см, 5 см). Масса 0,846 кг

AM-WSP-06 Размер XL	Д x Ш x Г (63 см, 34 см, 5 см). Масса 0,964 кг
AM-WSP-06 Размер XXL	Д x Ш x Г (66 см, 39 см, 5 см). Масса 1,099 кг
AM-WSP-06 Размер XXXL	Д x Ш x Г (66 см, 44,5 см, 5 см). Масса 1,209 кг

AM-WSP-06 (детский)	
Общее описание Бандаж пояснично-крестцово-грудного отдела с нахлестом на ключичную область, снабжен профилированными ортопедическими вкладышами-планшетками в пояснично-крестцово-грудном отделе, а также лентами, стабилизирующими ключичную область. Детский ортопедический ортез состоит из двух частей. Модульная конструкция позволяет использовать ортез как единое целое, так и отдельные модули, в зависимости от индивидуальной необходимости. Данная модель легко адаптируется к телу ребенка, комфортна и проста в использовании. Показания • При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов • нестабильности позвоночника • после переломов позвоночника на фоне остеопороза (при предварительной консультации с врачом) • дископатия поясничного отдела • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор • на фоне ишиаса • при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника • при остеопорозе Технические характеристики	
Размер 1 Обхват в поясе 50-60 см	Размер 2 Обхват в поясе 60,5-70 см
Размер 1 Расстояние от Th3 до копчика 35-38 см	Размер 2 Расстояние от Th3 до копчика 38,5-42 см




Габаритные размеры и масса

AM-WSP-06 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (36 см, 20 см, 4 см). Масса 0,357 кг
AM-WSP-06 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (40 см, 24 см, 4 см). Масса 0,415 кг

AM-WSP-07

Общее описание

Высокий ортез AM-WSP-07 был модифицирован разработан более анатомически. В пояснично-крестцовом отделе находятся анатомически профилированные ортопедические вкладыши горячим способом покрытые порошковым лаком. Этот способ защищает вкладыши перед коррозией, они устойчивы к воздействию пота и состоящую в нем соль, не пачкают ортез и одежду и устойчивы к деформациям. В изделии использовано два независимых набора эластичных скрещенных лент, стабилизирующих ортопедические вкладыши и регулирующих силу сжатия и уровень стабилизации.

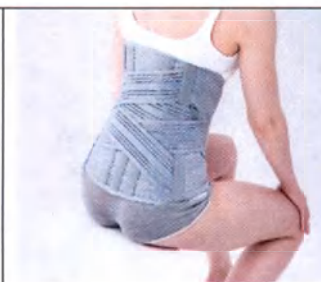

Показания

- острых комплексных болей в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатии в поясничном отделе,
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора
- деформации поясничного отдела позвоночника,
- поясничного смещения позвонков,
- перенапряжения пояснично-крестцового отдела
- дегенеративных изменений в пояснично-крестцовом и грудном отделах позвоночника,
- после операций (ортопедия, нейрохирургия).

Технические характеристики

Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125,5-145 см
--------------------------------------	--	--	--	--	---

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-07 Размер S	Д x Ш x Г (33 см, 22 см, 4 см). Масса 0,326 кг
AM-WSP-07 Размер M	Д x Ш x Г (33 см, 25,5 см, 4 см). Масса 0,363 кг
AM-WSP-07 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 30 см, 4 см). Масса 0,403 кг
AM-WSP-07 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 34 см, 4 см). Масса 0,443 кг
AM-WSP-07 Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 39 см, 4 см). Масса 0,488 кг
AM-WSP-07 Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 44 см, 4 см). Масса 0,537 кг

AS-LK					
Общее описание Мужской пояснично-крестцовый ортез SOLID AS-LK помогает уменьшить боль в пояснице и предотвращает мышечные спазмы. Изделие изготовлено из ортопедической резины. Двухслойная конструкция позволяет индивидуально подобрать изделие и установить правильное сжатие для живота и спины. Предотвращает травмы во время интенсивных физических нагрузок и активного образа жизни. Воздухопроницаемый материал позволяет комфортно носить изделие в течение дня, а подтяжки, прикрепленные к ортезу, гарантируют, что он всегда будет в нужном месте. Показания • При острых пояснично-крестцовых болевых синдромах • При дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом сегменте • При поясничной дископатии • После операции на поясничном отделе позвоночника (ортопедия, нейрохирургия) • После снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовом отделе в качестве стабилизатора • При деформации позвоночника в поясничном отделе • При спондилолистезе в поясничной области • При состоянии пояснично-крестцовой перегрузки. Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

AS-LK Размер S	Д x Ш x Г (15 см, 33 см, 5 см). Масса 0,292 кг
AS-LK Размер M	Д x Ш x Г (15 см, 37 см, 5 см). Масса 0,314 кг
AS-LK Размер L	Д x Ш x Г (15 см, 41 см, 5 см). Масса 0,338 кг
AS-LK Размер XL	Д x Ш x Г (20 см, 45 см, 5 см). Масса 0,372 кг
AS-LK Размер XXL	Д x Ш x Г (25 см, 49,5 см, 5 см). Масса 0,409 кг
AS-LK Размер XXXL	Д x Ш x Г (25 см, 54 см, 5 см). Масса 0,438 кг

AS-LK-01				
Общее описание Пояс AS-LK-01 имеет уплотнение в области поясничного отдела позвоночника и тройную систему застегивания, которая предохраняет от случайного расстегивания. Пояс помогает при поднятии тяжестей, например, штанги. Пояс стабилизирует позвоночник в поясничном отделе, защищает его при физическом труде и снимает нагрузки с позвоночника при нагибании. Особенно защищает от травм при тренировках культуристов. Хорошо подходит при занятиях спортом, физическом труде.				
Показания • растяжение мышц живота и спины из-за травмы или перегрузки, • людям со слабыми мышцами живота, делающих тяжелую физическую работу, • хронические болевые синдромы поясничного отдела позвоночника, • профилактически во время тренировок в тяжелой атлетике (бодибилдинг, штанга, пауэрлифтинг).				
Технические характеристики				
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см

Габаритные размеры и масса

AS-LK-01 Размер S	Д x Ш x Г (16 см, 34 см, 6 см). Масса 0,179 кг
AS-LK-01 Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 38 см, 6 см). Масса 0,199 кг
AS-LK-01 Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 42 см, 6 см). Масса 0,221 кг
AS-LK-01 Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 46 см, 6 см). Масса 0,243 кг
AS-LK-01 Размер XXL	Д x Ш x Г (16 см, 51 см, 6 см). Масса 0,267 кг

AM-SO-07**Общее описание**

Орtez имеет очень крепкую поясничную пелоту из пластика, которая со стороны тела имеет обивку из комфортной пены с чехлом из хлопчатой ткани. Такая конструкция пелоты устраняет дискомфорт даже при длительном использовании. К пелоте крепятся крепкие ремни безопасности с разгружающими коленными подушечками, натяжными пряжками и соединительная пряжка. Ремни создают две петли, которые надеваются на колени, а при помощи боковых натяжных пряжек производится натяжение. Чем сильнее укоротить ремни, тем сильнее задняя пелота воздействует на поясничный отдел увеличивая лордоз позвоночника. Соединительная пряжка позиционирует изделие на теле и не позволяет раздвигать колени. Чтобы снять орtez нужно просто ослабить натяжение ремней и расстегнуть соединительную пряжку.

**Показания**

- длительное времяпровождение в положении сидя,
- сутулость,
- плоский лордоз поясницы,
- перегрузки позвоночника,
- дископатия.

Технические характеристики

Размер универсальный

Габаритные размеры и масса

AM-SO-07 Размер универсальный

Д x Ш x Г (13 см, 42 см, 3 см). Масса 0,413 кг

AM-SO-08**Общее описание**

Орtez туловища AM-SO-08 это поддержка для перегруженной спины. Его можно применять дома, на работе, в спортзале, в тренажерном зале — всюду где позвоночник подвержен перегрузкам. Так вы предотвратите неприятные травмы и боли.

Показания

- острые болевые синдромы в пояснично-крестцовой области,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в поясничной области,
- после хирургических вмешательств на поясничном отделе позвоночника,
- после снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовой области в качестве стабилизатора,



- деформация позвоночника в поясничной области,
- перегрузка пояснично-крестцовой области позвоночника.

Технические характеристики

Размер универсальный

Габаритные размеры и масса

AM-SO-08 Размер универсальный

Д х Ш х Г (20 см, 38 см, 2 см). Масса 0,246 кг

MS-T-02/TLSO PLUS

Общее описание

Представляет собой очень надежный рамный корсет пояснично-крестцового отдела позвоночника с регулировкой высоты и окружности. Диапазон стабилизации корсета MS-T-02/TLSO PLUS от 3 грудного позвонка (Th3) до 5 поясничного позвонка (L5). задняя металлическая рама очень эффективно стабилизирует поясничный отдел позвоночника. В верхней грудной части рамы установлена регулируемая пелота из ABS, к которой крепятся две поворотные пряжки из полиамида с ремнями под подмышки. В области поясницы к металлической раме крепятся 4 эластичный боковины из пластика ABS, которые хорошо адаптируются к телу пациента и стабилизируют позвоночник в боковой плоскости. Внизу рамы есть крестцовая пелота. В передней части корсета есть регулируемые пелоты из ABS: грудины, грудной клетки, брюшная и лобка.

Показания

- острые боли в области пояснично-крестцового отдела,
- дископатия многоуровневая
- болезнь Шойермана
- Болезнь Паркинсона
- спондилит (АС)
- нестабильность позвоночника
- ишиас
- опухоли позвоночника
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и торакальном отделе
- после операции (ортопедия, нейрохирургия)
- после снятия иммобилизации в пояснично-грудном отделе в качестве стабилизатора
- переломы в области пояснично-грудного отдела позвоночника (травматические, на почве остеопороза)
- сгибательные контрактуры позвоночника (связки, мышцы)
- некоторые дефекты осанки.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-145 см	65-145 см	65-145 см
Высота от ручки грудины до лонного сочленения	Высота от ручки грудины до лонного сочленения	Высота от ручки грудины до лонного сочленения
44-49 см	47-55 см	53-61 см

Габаритные размеры и масса

MS-T-02/TLSO PLUS Размер S	Д x Ш x Г (45 см, 65 см, 4 см). Вес 0,970 кг
MS-T-02/TLSO PLUS Размер M	Д x Ш x Г (51 см, 65 см, 4 см). Вес 0,980 кг
MS-T-02/TLSO PLUS Размер L	Д x Ш x Г (57 см, 65 см, 4 см). Вес 0,990 кг

MS-T-01/LSO PLUS	
Общее описание Модульный ортопедический корсет представляет собой очень надежный рамный корсет пояснично-крестцового отдела позвоночника с регулировкой высоты и окружности. Диапазон стабилизации корсета MS-T-01/LSO+ от 3 грудного позвонка (Th3) до 5 поясничного позвонка (L5). Передняя часть корсета не охватывает грудную клетку, таким образом не затрудняет дыхание. Высокая металлическая рама сзади эффективно стабилизирует пояснично-грудной отдел позвоночника. Четыре эластичные боковины из пластика ABS хорошо адаптируются к телу, стабилизируют позвоночник в сагиттальной плоскости. Корсет имеет две независимые застежки спереди, благодаря чему компрессия нижней и верхней части туловища может довольно удобным образом регулироваться. Показания • острые боли в области пояснично-крестцовой и грудной, • дископатия многоуровневая • нестабильность позвоночника • поясничный спондилолистез • ишиас • опухоли позвоночника • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и торакальном отделе • после операции (ортопедия, нейрохирургия) • после снятия иммобилизации в пояснично-крестцовом и грудном отделе в качестве стабилизатора • некоторые дефекты осанки. Технические характеристики	

Размер М Обхват в поясе - 65-145 см Расстояние от Th9 до копчика - 38-41 см	Размер L Обхват в поясе - 65-145 см Расстояние от Th9 до копчика - 45-48 см
--	--

Габаритные размеры и масса

MS-T-01/LSO PLUS Размер М	Д x Ш x Г (38 см, 50 см, 7 см). Масса 1,009 кг
MS-T-01/LSO PLUS Размер L	Д x Ш x Г (44 см, 50 см, 7 см). Масса 1,233 кг

MS-T-02/TLSO		
Общее описание Конструкция ортеза позволяет поддерживать грудной, поясничный и крестцовый отделы позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях, компенсировать нагрузку и использовать изделие на всем периоде восстановления, легко подгоняется под индивидуальные параметры и размеры. Корсет позволяет регулировать степень компрессии, ширину и высоту, а также комбинировать модули, по необходимости – демонтировать тот или иной элемент конструкции. Все жесткие элементы конструкции анатомически профилированы и обтянуты ортопедическим текстилем. Показания • острые боли в области пояснично-крестцового отдела, • дископатия многоуровневая • болезнь Шойермана • Болезнь Паркинсона • спондилит (АС) • нестабильность позвоночника • ишиас • опухоли позвоночника • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и торакальном отделе • после операции (ортопедия, нейрохирургия) • после снятия иммобилизации в пояснично-грудном отделе в качестве стабилизатора • сгибательные контрактуры позвоночника (связки, мышцы) • некоторые дефекты осанки Технические характеристики		
Размер S Обхват талии 65-145 см Высота от ручки грудины до лонного сочленения 44-49 см	Размер М Обхват талии 65-145 см Высота от ручки грудины до лонного сочленения 47-55 см	
	Размер L Обхват талии 65-145 см Высота от ручки грудины до лонного сочленения 53-61 см	

Габаритные размеры и масса

MS-T-02/TLSO Размер S	Д x Ш x Г (47 см, 63 см, 4 см). Масса 0,698 кг
MS-T-02/TLSO Размер M	Д x Ш x Г (52 см, 63 см, 4 см). Масса 0,751 кг
MS-T-02/TLSO Размер L	Д x Ш x Г (57 см, 63 см, 4 см). Масса 0,804 кг

AM-WSP-08					
Общее описание Высокий ортез AM-WSP-08 сделан из неэластичных материалов, он оснащен системой боковой шнуровки, которая гарантирует надлежащую функциональность и диапазон стабилизации продукта, а также его высокий комфорт использования. Ортез имеет анатомическую форму, благодаря чему хорошо прилегает к телу и хорошо стабилизирует груднопоясничный отдел позвоночника. В задней части есть карман для установки рамы по Хоманну. По бокам кармана установлены 2 анатомические упругие вставки. Вставки имеют точно заданную жесткость благодаря закалке и порошковое покрытие для защиты от пота. Застегивание в асимметричный способ. Для точной подгонки к телу и регулировки нужной стабилизации ортез снабжен 2 наборами двойных шнурованных ремней с застежками на липучках велкро. Показания • при острых и хронических болевых синдромах позвоночника и крестцово-подвздошных суставов, вызванных дископатией, спондилолистезом, дегенеративными изменениями и другими болезненными процессами • при острых и хронических радикулярных болевых синдромах (радикулит) • после травм (вывихи, переломы позвоночника, повреждение мышц спины и живота) — консервативное хирургическое лечение • патологические переломы позвоночника (например, остеопороз, рак) • после травм травмы или перегрузок (слишком интенсивных тренировок или тяжелой физической работы) мышц живота и спины • при вертикализации и во время учебы ходить у пациентов с ортопедическими и неврологическими заболеваниями. Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-08 Размер S	Д x Ш x Г (34 см, 32 см, 4 см). Масса 0,237 кг
AM-WSP-08 Размер M	Д x Ш x Г (34 см, 36 см, 4 см). Масса 0,266 кг
AM-WSP-08 Размер L	Д x Ш x Г (34 см, 41 см, 4 см). Масса 0,295 кг
AM-WSP-08 Размер XL	Д x Ш x Г (38 см, 46 см, 4 см). Масса 0,330 кг
AM-WSP-08 Размер XXL	Д x Ш x Г (42 см, 51,5 см, 4 см). Масса 0,370 кг
AM-WSP-08 Размер XXXL	Д x Ш x Г (44 см, 57,5 см, 4 см). Масса 0,414 кг

AM-WSP-09

Общее описание

Ортез имеет полужесткую брюшную пелоту и задние ортопедические вставки. Эти элементы защищают позвоночник от неконтролируемых движений, приводящих к травме. Дополнительно изделие оборудовано системой ремней с упрощенным застегиванием, которые способствуют оптимальной адаптации изделия сзади. Ремни имеют динамическую систему, позволяющую свободные движения и не ограничивают дыхание. Система регулирования максимизирует компрессию живота с минимальным натяжением. Создает соответствующее давление адаптируясь к анатомической форме конкретного пациента.

Показания

- острые боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в поясничном отделе,
- после операции поясничного отдела позвоночника,
- после снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовом отделе в качестве стабилизатора,
- деформация позвоночника в области поясницы,
- перегрузка позвоночника в пояснично-крестцовом отделе.

Технические характеристики

Размер S Обхват талии 65,5-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см	Размер XXXL Обхват талии 125,5-145 см
--	--	--	--	--	---



Габаритные размеры и масса

AM-WSP-09 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 23 см, 5 см). Масса 0,514 кг
AM-WSP-09 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 27,5 см, 5 см). Масса 0,572 кг
AM-WSP-09 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 32 см, 5 см). Масса 0,635 кг
AM-WSP-09 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 36,5 см, 5 см). Масса 0,699 кг
AM-WSP-09 Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 41 см, 5 см). Масса 0,768 кг
AM-WSP-09 Размер XXXL	Д x Ш x Г (30 см, 46,5 см, 5 см). Масса 0,845 кг

AM-WSP-10

Общее описание

Ортез имеет полужесткую брюшную пелоту и задние ортопедические вставки. Эти элементы защищают позвоночник от неконтролируемых движений, приводящих к травме. Дополнительно изделие оборудовано системой ремней с упрощенным застегиванием, которые способствуют оптимальной адаптации изделия сзади. Ремни имеют динамическую систему, позволяющую свободные движения в ортезе и не ограничивают дыхание. Система регулирования максимизирует компрессию живота с минимальным натяжением. Создает соответствующее давление адаптируясь к анатомической форме конкретного пациента.

Показания

- острые боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника,
- травмы в области грудного пояснично-крестцового отделов позвоночника,
- дегенерация позвоночника в грудно-пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в грудопоясничном отделе,
- после операции в области перехода грудопоясничного отдела позвоночника,
- раковые опухоли в пределах Th8-L5,
- Болезнь Педжета,
- после снятия гипсовой иммобилизации в грудно-пояснично-крестцовом отделе в качестве стабилизатора,
- деформация позвоночника в грудопоясничном отделе,
- перегрузка позвоночника в грудно-пояснично-крестцовом отделе
- нестабильность позвоночника в грудно-пояснично-



крестцовом отделе. Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

AM-WSP-10 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 24 см, 4 см). Масса 0,521 кг
AM-WSP-10 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 28,5 см, 4 см). Масса 0,579 кг
AM-WSP-10 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 33 см, 4 см). Масса 0,643 кг
AM-WSP-10 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 37,5 см, 4 см). Масса 0,707 кг
AM-WSP-10 Размер XXL	Д x Ш x Г (35 см, 43 см, 4 см). Масса 0,778 кг
AM-WSP-10 Размер XXXL	Д x Ш x Г (35 см, 49 см, 4 см). Масса 0,856 кг

MS-T-01/TLSO PLUS	
Общее описание Это очень прочный экзоскелетный корсет позвоночника с регулировкой высоты и обхвата. Передняя часть корсета не охватывает грудную клетку, таким образом не затрудняет дыхание. Солидная и высокая металлическая рама сзади эффективно стабилизирует пояснично-грудной отдел позвоночника. В верхней грудной части рамы имеется регулируемая пластиковая пелота к которой крепятся две поворотные пряжки с лямками. В средней части рамы есть отверстия, в которые в подходящих для конкретного пациента местах устанавливаются поворотные пряжки, через которые пропускаются лямки. К задней раме в области поясницы крепятся 4 эластичные пластиковые боковины, адаптирующиеся к пациенту и стабилизирующие позвоночник в боковой плоскости. Показания • после переломов в позвоночнике (включая компрессионные) • после операции (ортопедия, нейрохирургия) • остеопоротические переломы позвоночника • деформированные позвонки • Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) • болезнь Шюермана	

• болезнь Паркинсона • резкие боли в пояснично-крестцовом отделе • дископатия многоуровневая • нестабильность позвоночника • поясничный спондилолистез • ишиас • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом торакальном отделе • опухоли позвоночника • туберкулез позвоночника • дефекты осанки (гиперкифоз, поясничный гиперлордоз)	
Технические характеристики	
РАЗМЕР M Обхват в поясе - 65-145 см Высота корсета спереди - 35 см Расстояние от Th3 до копчика - 55-59 см	РАЗМЕР L Обхват в поясе - 65-145 см Высота корсета спереди - 35 см Расстояние от Th3 до копчика - 62-66 см

Габаритные размеры и масса

MS-T-01/TLSO PLUS Размер M	Д x Ш x Г (55 см, 65 см, 6 см). Масса 0,938 кг
MS-T-01/TLSO PLUS Размер L	Д x Ш x Г (62 см, 65 см, 6 см). Масса 1,032 кг

MS-T-01/TLSO	
Общее описание Представляет собой очень надежный рамный корсет позвоночника с регулировкой высоты и окружности. Диапазон стабилизации корсета MS-T-01/TLSO от 3 грудного позвонка (Th3) до 5 поясничного позвонка (L5). Передняя часть корсета не охватывает грудную клетку, таким образом не затрудняет дыхание. Солидная и высокая металлическая рама сзади эффективно стабилизирует пояснично-грудной отдел позвоночника. В верхней грудной части рамы имеется регулируемая пластиковая пелота к которой крепятся две поворотные пряжки с лямками. В средней части рамы есть отверстия, в которые в подходящих для конкретного пациента местах устанавливаются поворотные пряжки, через которые пропускаются лямки. К задней раме в области поясницы крепятся 4 эластичные пластиковые боковины, адаптирующиеся к пациенту и стабилизирующие позвоночник в боковой плоскости. Показания • после переломов в позвоночнике (включая компрессионные) • после операции (ортопедия, нейрохирургия) • остеопоротические переломы позвоночника • деформированные позвонки • Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь	

Бехтерева) • болезнь Шюермана • болезнь Паркинсона • резкие боли в пояснично-крестцовом отделе • дископатия многоуровневая • нестабильность позвоночника • поясничный спондилолистез • ишиас • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом торакальном отделе • опухоли позвоночника • туберкулез позвоночника • дефекты осанки (гиперкифоз, поясничный гиперлордоз)	
Технические характеристики	
РАЗМЕР M Обхват в поясе - 65-145 см Высота корсета спереди - 23 см Расстояние от Th3 до копчика - 55-59 см	РАЗМЕР L Обхват в поясе - 65-145 см Высота корсета спереди - 23 см Расстояние от Th3 до копчика - 62-66 см

Габаритные размеры и масса

MS-T-01/TLSO Размер M	Д x Ш x Г (60 см, 50 см, 5 см). Масса 1,040 кг
MS-T-01/TLSO Размер L	Д x Ш x Г (67 см, 50 см, 5 см). Масса 1,144 кг

FIX-T-01	
Общее описание Жилет FIX-T-01 состоит из 2 частей: передней, застегивающейся на замок и тыльной панели, имеющей 3 возможных уровня стабилизации. Жилет идеально стабилизирует туловище ребенка и улучшает проприоцепцию. Первая, передняя часть, всегда одинакова, и к ней пристегивается тыльная панель жилета, которая бывает разной, в зависимости от выбранного уровня стабилизации. Передняя часть жилета оснащена замком-молнией, облегчающим его накладывание, и ремнями Velcro с липучками: плечевые ремни и ремни для промежности, а также боковые застежки. Такое решение обеспечивает большой диапазон регулирования по обхвату изделия и его точное приспособление к пользователю. Тыльная панель жилета поставляется в 4 вариантах, предлагая разные уровни стабилизации.	
Показания • неврологические расстройства (нарушение сенсорной интеграции, гипотония, детский церебральный паралич, синдром Дауна) • болезнь Шейермана • смещение позвонков	

- межпозвоночная щель
- другие переломы из-за перенапряжения в области позвоночника
- воспаление суставов позвоночника
- повреждение околопозвоночных мышц и мышц хребта
- ушибы, растяжения грудно-поясничного отдела позвоночника

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5
Обхват туловища 40 — 50 см	Обхват туловища 48 — 65 см	Обхват туловища 60 — 70 см	Обхват туловища 60 — 70 см	Обхват туловища 68 — 80 см
Длина от большого вертела до подмышки 17 — 22 см	Длина от большого вертела до подмышки 22,5 — 27 см	Длина от большого вертела до подмышки 27,5 — 31 см	Длина от большого вертела до подмышки 31,5 — 35 см	Длина от большого вертела до подмышки 35,5 — 40 см

Габаритные размеры и масса

FIX-T-01 Размер 1	Д x Ш x Г (30 см, 31 см, 4 см). Масса 0,590 кг
FIX-T-01 Размер 2	Д x Ш x Г (36 см, 33,5 см, 4 см). Масса 0,655 кг
FIX-T-01 Размер 3	Д x Ш x Г (40 см, 36 см, 4 см). Масса 0,728 кг
FIX-T-01 Размер 4	Д x Ш x Г (50 см, 36 см, 4 см). Масса 0,783 кг
FIX-T-01 Размер 5	Д x Ш x Г (50 см, 38,5 см, 4 см). Масса 0,838 кг

FIX-T-02

Общее описание

Ортез позвоночника FIX-T-02 изготовлен из легкого алюминиевого каркаса, облицованного благоприятным для кожного покрова водоотпорным материалом. Он оснащен регулируемыми по длине лентами, с помощью которых можно правильно приспособить изделие к спине и обеспечить ее надежную стабилизацию. Каркас имеет анатомически профилированную форму, которая обеспечивает идеальную разгрузку грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника. Узкая форма между лопатками не вызывает неудобного давления и дискомфорта во время использования. В каркасе находятся специальные отверстия для обеспечения постоянного потока воздуха, снабжения кожного покрова кислородом и отличной вентиляции.

Показания

- болезнь Шейермана
- смещение позвонков (Спондилолистез)
- межпозвоночная щель



• другой перелом при перегрузке в области позвоночника • воспаление суставов позвоночника • повреждение околопозвоночных мышц и мышц хребта • ушибы, растяжения грудно-поясничного отдела позвоночника		
Технические характеристики		
Размер 1 Обхват пояса - мин 40 — макс 60 см Расстояние от Th3 до копчика - мин 31 — макс 35,5 см Подходит для возраста - 2 – 4 года	Размер 2 Обхват пояса - мин 45 — макс 65 см Расстояние от Th3 до копчика - мин 36 — макс 40,5 см Подходит для возраста - 4 – 9 лет	Размер 3 Обхват пояса - мин 45 — макс 75 см Расстояние от Th3 до копчика - мин 41 — макс 45 см Подходит для возраста - 8 – 12 лет

Габаритные размеры и масса

FIX-T-02 Размер 1	Д x Ш x Г (32 см, 26 см, 4 см). Масса 0,579 кг
FIX-T-02 Размер 2	Д x Ш x Г (37 см, 30,5 см, 4 см). Масса 0,673 кг
FIX-T-02 Размер 3	Д x Ш x Г (50 см, 36 см, 4 см). Масса 0,783 кг

OT-13	
Общее описание Мягкость и эластичность используемого материала обеспечивают мягкое, но эффективное сжатие. Ортез имеет эластичные ортопедические косточки, которые отлично разгружают грудно-поясничный отдел позвоночника. Кроме того, ортез был оснащен затяжными ремнями, которые обеспечивают постепенное сжатие, анатомическую форму и отличную адгезию изделия к поясничному лордозу. Применяемые ортопедические пластины с каждым движением снимают напряжение на позвонках и параспинальных мышцах. Предотвращают их перегрузку и дегенерацию межпозвонковых дисков. Показания • пояснично-крестцовые болевые синдромы • пояснично-крестцовая дегенерация позвоночника • Поясничная дископатия • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовом отделе в качестве	

стабилизатора • деформация позвоночника в поясничном отделе • перегрузка мягких тканей пояснично-крестцового отдела • профилактически при потере повышенной физической активности.					
Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-13 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 24 см, 4 см). Масса 0,215 кг
ОТ-13 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 28,5 см, 4 см). Масса 0,239 кг
ОТ-13 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 33 см, 4 см). Масса 0,266 кг
ОТ-13 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 37,5 см, 4 см). Масса 0,293 кг
ОТ-13 Размер XXL	Д x Ш x Г (26 см, 43 см, 4 см). Масса 0,322 кг
ОТ-13 Размер XXXL	Д x Ш x Г (26 см, 49 см, 4 см). Масса 0,354 кг

ОТ-37	
Общее описание В пояснично-крестцовом отделе ортеза размещены ортопедические вкладыши, а также поясничная пластина покрытые горячим порошковым покрытием. Этот способ их защиты приводит к тому, что пластины не ржавеют, устойчивы к поту пациента и содержащейся в нем соли, не пачкают изделия и одежду пациента и устойчивы к деформации. Использование в высоком ортезе этого типа ортопедических пластин приводит к отличной жесткости и укреплению пояснично-крестцовой части позвоночника. В изделии установлен набор затяжных лент обеспечивающих точную подгонку ортеза, а также повышает прижимную силу и стабильность ортопедических пластин. Показания • острые болевые синдромы пояснично-крестцовых областей, • дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • пояснично-крестцовая дископатия, • после оперативных процедур (ортопедия, нейрохирургия),	

• после снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовом отделе в качестве стабилизатора. Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-37 Размер М	Д x Ш x Г (26 см, 37,5 см, 7 см). Масса 0,328 кг
ОТ-37 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 42 см, 7 см). Масса 0,353 кг
ОТ-37 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 46,5 см, 7 см). Масса 0,378 кг
ОТ-37 Размер XXL	Д x Ш x Г (26 см, 51 см, 7 см). Масса 0,404 кг
ОТ-37 Размер XXXL	Д x Ш x Г (26 см, 56,5 см, 7 см). Масса 0,432 кг

ОТ-36				
Общее описание Пояснично-крестцовый ортез ОТ-36 имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и стабилизирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Сзади установлены 4 анатомической формы профилированные ортопедические вставки из пластика. Они имеют точно ограниченный степень эластичности. Застежки спереди, в новый асимметричный способ, позволяющий лучше адаптировать ортез телу. Кроме того, наличие эластичных затяжных ремней, улучшающих стабилизацию позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и уровень компрессии изделия.				
Показания • болевые синдромы крестцового отдела позвоночника, • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • дископатия в области поясницы, • деформация позвоночника в поясничной области, • спондилолистез в поясничной области, • перегрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника.				
Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-36 Размер М	Д x Ш x Г (33 см, 33,5 см, 4 см). Масса 0,325 кг
ОТ-36 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 36 см, 4 см). Масса 0,349 кг
ОТ-36 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 39,5 см, 4 см). Масса 0,373 кг
ОТ-36 Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 43 см, 4 см). Масса 0,400 кг
ОТ-36 Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 46,5 см, 4 см). Масса 0,427 кг

ОТ-35				
Общее описание Орtez ОТ-35 характеризуется очень сильной круговой стабилизацией, а благодаря гибким зажимным лентам она идеально подходит для тела пациента. В пояснично-крестцовой области находятся анатомически профилированные ортопедические вкладыши, покрытые порошковым лаком. Применение в ортезе ортопедических вставок такого типа и перекрестных лент в задней части, дает отличную стабилизацию и укрепление пояснично-крестцового отдела позвоночника. Изделие благоприятное для кожи пациента — ортез изготовлен из специальной ортопедической резины, состоящей в основном из хлопка, который нейтрален для кожи пациента. Показания • острых комплексных болей в пояснично-крестцовом отделе, • дископатии в поясничном отделе, • после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора • деформации поясничного отдела позвоночника, • поясничного смещения позвонков, • перенапряжения пояснично-крестцового отдела • после операций (ортопедия, нейрохирургия). Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе 72-86 см	Обхват в поясе 82-96 см	Обхват в поясе 92-106 см	Обхват в поясе 96-116 см	Обхват в поясе 112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-35 Размер М	Д x Ш x Г (21 см, 38,5 см, 3 см). Масса 0,482 кг
ОТ-35 Размер L	Д x Ш x Г (21 см, 43 см, 3 см). Масса 0,518 кг
ОТ-35 Размер XL	Д x Ш x Г (23 см, 47,5 см, 3 см). Масса 0,570 кг
ОТ-35 Размер XXL	Д x Ш x Г (23 см, 53 см, 3 см). Масса 0,610 кг
ОТ-35 Размер XXXL	Д x Ш x Г (25 см, 59 см, 3 см). Масса 0,671 кг

ОТ-34				
Общее описание Корсет ОТ-34 спроектирован с учетом анатомии, поэтому точно прилегает к любой фигуре и эффективно стабилизирует груднопоясничный отдел позвоночника. Корсет застегивается спереди асимметрично, чтобы лучше адаптироваться к телу пациента. Кроме того, имеются затяжные ремни, которые улучшают стабилизацию поясничного отдела позвоночника и задают нужную компрессию. В пояснично-крестцовом отделе находятся анатомически профилированные ортопедические вкладыши, покрытые порошковым лаком. Этот способ защищает вкладыши перед коррозией, они устойчивы к воздействию пота и состоящую в нем соль, не пачкают ортез и одежду и устойчивы к деформациям. Показания • острых комплексных болей в пояснично-крестцовом отделе, • дископатии в поясничном отделе, • после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора • деформации поясничного отдела позвоночника, • поясничного смещения позвонков, • перенапряжения пояснично-крестцового отдела • дегенеративных изменений в пояснично-крестцовом и грудном отделах позвоночника, • после операций (ортопедия, нейрохирургия). Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-34 Размер М	Д х Ш х Г (62 см, 40,5 см, 5 см). Масса 0,671 кг
ОТ-34 Размер L	Д х Ш х Г (62 см, 45 см, 5 см). Масса 0,721 кг
ОТ-34 Размер XL	Д х Ш х Г (62 см, 49,5 см, 5 см). Масса 0,771 кг
ОТ-34 Размер XXL	Д х Ш х Г (62 см, 54 см, 5 см). Масса 0,825 кг
ОТ-34 Размер XXXL	Д х Ш х Г (62 см, 59,5 см, 5 см). Масса 0,883 кг

ОТ-33				
Общее описание Ортез выполнен из специальной эластичной резинки, растягивающейся вдоль и в поперек. в соответствии с новой более анатомической формой, благодаря чему изделие лучше подходит к любой фигуре и намного лучше стабилизирует поясничный отдел позвоночника. Сзади установлены 4 анатомической формы профилированные ортопедические пластинки из пластика. Они имеют точно ограниченный степень эластичности. Они принимают на себя часть нагрузки, снимая ее с позвоночника и спинальных мышц. Показания • после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья) • при воспалительных процессах сухожильных сумок; • при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава; • при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста); • для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс. Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-33 Размер М	Д х Ш х Г (28 см, 32 см, 6 см). Масса 0,265 кг
ОТ-33 Размер L	Д х Ш х Г (28 см, 36 см, 6 см). Масса 0,285 кг
ОТ-33 Размер XL	Д х Ш х Г (28 см, 40 см, 6 см). Масса 0,305 кг
ОТ-33 Размер XXL	Д х Ш х Г (28 см, 44 см, 6 см). Масса 0,326 кг
ОТ-33 Размер XXXL	Д х Ш х Г (28 см, 48 см, 6 см). Масса 0,349 кг

ОТ-32				
Общее описание Пояснично-крестцовый ортез ОТ-32 имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и стабилизирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Застежки спереди, в новый асимметричный способ, позволяющий лучше адаптировать ортез к телу. Кроме того, эластичные затяжные ремни, улучшают стабилизацию позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и уровень компрессии изделия. Благодаря использованию анатомически очерченных ортопедических косточек он стабилизирует и разгружает позвоночник в пояснично-крестцовом отделе. Укрепляет мышцы брюшной стенки. Поддерживая стабильную температуру и эластичное сжатие, оказывают эффект уменьшения болевых ощущений. Его заданием является уменьшение возникающих болей, предотвратить их возникновение, улучшить двигательную работоспособность пациента, улучшить качество и комфорт жизни. Показания • острые болевые синдромы в пояснично-крестцовом отделе, • дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • Поясничная дископатия, • после операций поясничного отдела позвоночника, • деформация позвоночника в поясничном отделе, • перегрузка пояснично-крестцового отдела. Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-32 Размер М	Д x Ш x Г (28 см, 36 см, 6 см). Масса 0,299 кг
ОТ-32 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 40 см, 6 см). Масса 0,322 кг
ОТ-32 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 44 см, 6 см). Масса 0,345 кг
ОТ-32 Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 48 см, 6 см). Масса 0,368 кг
ОТ-32 Размер XXXL	Д x Ш x Г (28 см, 52 см, 6 см). Масса 0,394 кг

ОТ-31						
Общее описание Пояснично-крестцовый ортез ОТ-31 имеет 2 набора эластичных затяжных ремней, улучшающих стабилизацию позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и уровень компрессии изделия. В задней части корсета установлены 4 ортопедических вставки, которые имеют точно заданный степень эластичности и порошковое покрытие для защиты от пота. В передней части — 2 эластичные вставки стабилизирующие переднюю часть корсета. Застежки спереди, в новый асимметричный способ, позволяющий лучше адаптировать ортез к телу.						
Показания • болевые синдромы пояснично-крестцового отдела позвоночника, • дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • дископатия в области поясницы, • деформация позвоночника в поясничной области, • спондилолистез в поясничной области, • перегрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника.						
Технические характеристики						
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см	

Габаритные размеры и масса

ОТ-31 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 29 см, 6 см). Масса 0,171 кг
ОТ-31 Размер М	Д x Ш x Г (27 см, 32,5 см, 6 см). Масса 0,184 кг
ОТ-31 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 36 см, 6 см). Масса 0,198 кг

ОТ-31 Размер XL	Д х Ш х Г (27 см, 39,5 см, 6 см). Масса 0,212 кг
ОТ-31 Размер XXL	Д х Ш х Г (27 см, 43,5 см, 6 см). Масса 0,228 кг
ОТ-31 Размер XXXL	Д х Ш х Г (27 см, 48 см, 6 см). Масса 0,243 кг

ОТ-30																							
Общее описание Ортез ОТ-30 характеризуется очень сильной круговой стабилизацией. В изделии установлен набор затяжных лент обеспечивающих точную подгонку ортеза, а также повышает прижимную силу и стабильность ортопедических пластин. Задняя часть ортеза изготовлена из гибкой ортопедической резины которая оснащена специальными отверстиями для обеспечения вентиляции и облегчения удаления пота с тела пациента. В пояснично-крестцовой области находятся анатомически профилированные ортопедические вставки, покрытые порошковым лаком. Этот способ защищает вставки перед коррозией, они устойчивы к воздействию пота и состоящей в нем соли, не пачкают ортез и одежду и устойчивы к деформациям. Применение в ортезе ОТ-30 ортопедических вставок такого типа и перекрестных лент, дает отличную стабилизацию и укрепление пояснично-крестцового отдела позвоночника. Показания • острых комплексных болей в пояснично-крестцовой области, • дегенерации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • дископатии в области поясницы, • после операций поясничного отдела позвоночника (ортопедия, нейрохирургия), • после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора, • деформации поясничного отдела позвоночника. • смещения позвонков в поясничном отделе • перенапряжения пояснично-крестцового отдела. Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер S</th><th>Размер M</th><th>Размер L</th><th>Размер XL</th><th>Размер XXL</th><th>Размер XXXL</th></tr> <tr> <td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td><td>Обхват талии</td></tr> <tr> <td>65,5-75 см</td><td>75,5-85 см</td><td>85,5-97 см</td><td>97,5-115 см</td><td>115,5-135 см</td><td>135,5-150 см</td></tr> </table>			Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см			
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL																		
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии																		
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см																		

Габаритные размеры и масса

ОТ-30 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 31 см, 3 см). Масса 0,235 кг
ОТ-30 Размер М	Д x Ш x Г (27 см, 34,5 см, 3 см). Масса 0,253 кг
ОТ-30 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 39 см, 3 см). Масса 0,272 кг
ОТ-30 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 43,5 см, 3 см). Масса 0,291 кг
ОТ-30 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 48 см, 3 см). Масса 0,311 кг
ОТ-30 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 53,5 см, 3 см). Масса 0,333 кг

ОТ-29

Общее описание

Орtez ОТ-29 стабилизирует и разгружает позвоночник в пояснично-крестцовом отделе, стабилизирует крестцово-бедерные суставы; укрепляет стенку мышц живота. Изготовлен из высококачественного эластичного дышащего материала, идеально подходит для тела пациента, система упругих элементов укрепляет ортез. Уменьшает возникающие болевые ощущения, препятствует их возникновению, улучшает двигательную работоспособность пациента. Пояснично-крестцовый ортез ОТ-29 имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и стабилизирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Сзади установлены 4 вставки анатомической формы. Кроме того, есть 2 набора эластичных затяжных ремней, улучшающих стабилизацию и компрессию.

Показания

- болевые синдромы крестцового отдела позвоночника,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в области поясницы,
- деформация позвоночника в поясничной области,
- спондилолистез в поясничной области,
- перегрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника

Технические характеристики

Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см



Габаритные размеры и масса

ОТ-29 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 31 см, 4 см). Масса 0,329 кг
-----------------------	--

ОТ-29 Размер М	Д x Ш x Г (27 см, 34 см, 4 см). Масса 0,353 кг
ОТ-29 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 38 см, 4 см). Масса 0,380 кг
ОТ-29 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 42 см, 4 см). Масса 0,407 кг
ОТ-29 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 46 см, 4 см). Масса 0,434 кг
ОТ-29 Размер XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 50 см, 4 см). Масса 0,466 кг

ОТ-28

Общее описание

Высокий ортез ОТ-28 крестцово-пояснично-грудной с подмышками из специальной ортопедической резинки. Дополнительным преимуществом является возможность регулировки высоты стойки позвоночника. Анатомический разрез изделия заставляет ортез более точно приспосабливаться к любой фигуре и намного лучше стабилизирует крестцово-пояснично-грудной отдел позвоночника. Используя подтяжки в грудном отделе, осуществляется передняя и задняя стабилизация по всей длине позвоночника. В задней части корсета есть 2 ортопедические вставки анатомической формы, которые имеют строго заданную эластичность. А также крепление стабилизации позвоночника. Ортез предназначен для уменьшения боли, предотвращения ее возникновения, повышения мобильности пациента, улучшения качества и комфорта.

Показания

- болевые синдромы в пояснично-крестцовом и грудном отделе,
- многоуровневая дископатия,
- остеопороз,
- Небольшая нестабильность позвоночника,
- спондилолистез поясничного отдела,
- ишиас,
- дегенерация позвоночника в пояснично-крестцовом и грудном отделе,
- Некоторые дефекты осанки.

Технические характеристики



Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см
Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высота
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-28 Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 22 см, 2 см). Масса 0,329 кг
ОТ-28 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 25 см, 2 см). Масса 0,353 кг
ОТ-28 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 28 см, 2 см). Масса 0,380 кг
ОТ-28 Размер XL	Д x Ш x Г (35 см, 31 см, 2 см). Масса 0,418 кг
ОТ-28 Размер XXL	Д x Ш x Г (41 см, 34 см, 2 см). Масса 0,460 кг
ОТ-28 Размер XXXL	Д x Ш x Г (41 см, 37 см, 2 см). Масса 0,492 кг

ОТ-27

Общее описание

Орtez ОТ-27 характеризуется очень сильной круговой стабилизацией, а благодаря гибким зажимным лентам она идеально подходит для тела пациента. Изделие благоприятное для кожи пациента — ортез изготовлен из специальной ортопедической резины, состоящей в основном из хлопка, который нейтрален для кожи пациента. В пояснично-крестцовой области находятся анатомически профилированные ортопедические вкладыши, покрытые порошковым лаком. Применение в ортезе ортопедических вставок такого типа и перекрестных лент в задней части, дает отличную стабилизацию и укрепление пояснично-крестцового отдела позвоночника. За счет малого масса изделия пациент ощущает комфорт при ношении ортеза.

Показания

- острых комплексных болей в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатии в поясничном отделе,
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора
- деформации поясничного отдела позвоночника,
- поясничного смещения позвонков,
- перенапряжения пояснично-крестцового отдела
- после операций (ортопедия, нейрохирургия).

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65,5-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-115 см	115,5-135 см	135,5-150 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-27 Размер S	Д х Ш х Г (26 см, 33 см, 7 см). Масса 0,305 кг
ОТ-27 Размер М	Д х Ш х Г (26 см, 37,5 см, 7 см). Масса 0,328 кг
ОТ-27 Размер L	Д х Ш х Г (26 см, 42 см, 7 см). Масса 0,353 кг
ОТ-27 Размер XL	Д х Ш х Г (29 см, 46,5 см, 7 см). Масса 0,388 кг
ОТ-27 Размер XXL	Д х Ш х Г (32 см, 52 см, 7 см). Масса 0,427 кг
ОТ-27 Размер XXXL	Д х Ш х Г (35 см, 57,5 см, 7 см). Масса 0,470 кг

ОТ-26

Общее описание

Состоящий из двух частей бандаж пояснично-крестцово-грудного отдела с нахлестом на ключичную область выполнен из легкой сетчатой ортопедической резины, снабжен профилированными ортопедическими вкладышами в пояснично-крестцово-грудном отделе, а также лентами, стабилизирующими ключичную область. По мере необходимости можно использовать только пояснично-крестцовую часть бандажа. Особенно рекомендуется при болях поясницы. При согласии пациента является оптимальным вариантом при переломах позвоночника, в случае остеопороза и при болезни Шейермана. Характеризуется высокой степенью стабилизации и безопасностью использования, комфортом и удобством.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов
- нестабильности позвоночника
- после переломов позвоночника на фоне остеопороза (при предварительной консультации с врачом)
- дископатия поясничного отдела
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор
- на фоне ишиаса
- при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника
- при остеопорозе.

Технические характеристики



Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высота
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-26 Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 28 см, 4 см). Масса 0,283 кг
ОТ-26 Размер M	Д x Ш x Г (32 см, 32 см, 4 см). Масса 0,314 кг
ОТ-26 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 36 см, 4 см). Масса 0,349 кг
ОТ-26 Размер XL	Д x Ш x Г (36 см, 40 см, 4 см). Масса 0,384 кг
ОТ-26 Размер XXL	Д x Ш x Г (39 см, 44 см, 4 см). Масса 0,422 кг
ОТ-26 Размер XXXL	Д x Ш x Г (42 см, 48 см, 4 см). Масса 0,465 кг

ОТ-25				
Общее описание Корсет ОТ-25 спроектирован с учетом анатомии, поэтому точно прилегает к любой фигуре и эффективно стабилизирует груднопоясничный отдел позвоночника. Корсет застегивается спереди асимметрично, чтобы лучше адаптироваться к телу пациента. Кроме того, имеются затяжные ремни, которые улучшают стабилизацию поясничного отдела позвоночника и задают нужную компрессию. В пояснично-крестцовом отделе находятся анатомически профилированные ортопедические вкладыши. Ортез позвоночника ОТ-25 нужно применять во время повышенной активности при хронических или длительных болях позвоночника. Показания • острых комплексных болей в пояснично-крестцовом отделе, • дископатии в поясничном отделе, • после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора • деформации поясничного отдела позвоночника, • поясничного смещения позвонков, • перенапряжения пояснично-крестцового отдела • дегенеративных изменений в пояснично-крестцовом и грудном отделах позвоночника, • после операций (ортопедия, нейрохирургия). Технические характеристики				
Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-25 Размер М	Д х Ш х Г (21 см, 38,5 см, 3см). Масса 0,482 кг
ОТ-25 Размер L	Д х Ш х Г (21 см, 43 см, 3см). Масса 0,518 кг
ОТ-25 Размер XL	Д х Ш х Г (21 см, 47,5 см, 3см). Масса 0,555 кг
ОТ-25 Размер XXL	Д х Ш х Г (21 см, 53 см, 3см). Масса 0,593 кг
ОТ-25 Размер XXXL	Д х Ш х Г (21 см, 59 см, 3см). Масса 0,635 кг

ОТ-24				
Общее описание Активное применение ортеза ОТ-24 уменьшает болевые ощущения пояснично-грудного и крестцового отделов позвоночника. Ортез обеспечивает гибкость, но в то же время обладает исключительной устойчивостью к растяжению. Таким образом, он не теряет анатомическую форму после многократного использования и обеспечивает эффективное сжатие даже в течение длительного времени использования. Показания • пояснично-крестцовые болевые синдромы • пояснично-крестцовая дегенерация позвоночника • Поясничная дископатия • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипсовой иммобилизации в пояснично-крестцовом отделе в качестве стабилизатора • деформация позвоночника в поясничном отделе • перегрузка мягких тканей пояснично-крестцового отдела • профилактически при потере повышенной физической активности. Технические характеристики Универсальный продукт для правого и левого запястья. Общая высота изделия: 25 см				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-24 Размер М	Д х Ш х Г (62 см, 40 см, 5 см). Масса 0,671 кг
ОТ-24 Размер L	Д х Ш х Г (62 см, 45 см, 5 см). Масса 0,721 кг
ОТ-24 Размер XL	Д х Ш х Г (62 см, 50 см, 5 см). Масса 0,771 кг

ОТ-24 Размер XXL	Д x Ш x Г (62 см, 55 см, 5 см). Масса 0,825 кг
ОТ-24 Размер XXXL	Д x Ш x Г (62 см, 60 см, 5 см). Масса 0,883 кг

ОТ-23				
Общее описание Орtez пояснично-крестцовый выполнен из лёгкой, хлопковой ортопедической резины позволяющей коже свободно дышать. Снабжен четырьмя профилируемыми ортопедическими вкладышами и двумя эластичными затягивающимися стабилизирующими поясами, которые регулируют силу и высоту фиксации. Стабилизирует пояснично бедренный сустав и нижний отдел позвоночника. Он уменьшает болевые симптомы, предотвращает их появлению, улучшает двигательную чёткость пациента. Поддерживает брюшную стенку и обладает обезболивающими свойствами благодаря компрессии и постоянной температуре. Бандаж улучшает подвижность, уменьшает и предотвращает боль и повышает качество жизни. Показания • острых комплексных болей в пояснично-крестцовом отделе, • дископатии в поясничном отделе, • после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора • деформации поясничного отдела позвоночника, • поясничного смещения позвонков, • перенапряжения пояснично-крестцового отдела • дегенеративных изменений в пояснично-крестцовом и грудном отделах позвоночника, • после операций (ортопедия, нейрохирургия). Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-23 Размер М	Д x Ш x Г (28 см, 32 см, 6 см). Масса 0,257 кг
ОТ-23 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 36 см, 6 см). Масса 0,285 кг
ОТ-23 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 40 см, 6 см). Масса 0,314 кг
ОТ-23 Размер XXL	Д x Ш x Г (32 см, 44 см, 6 см). Масса 0,345 кг
ОТ-23 Размер XXXL	Д x Ш x Г (34 см, 48 см, 6 см). Масса 0,379 кг

ОТ-22

Общее описание

Конструкция ортеза и лямки выполняют роль корректора осанки, способствующего постоянному правильному положению тела.

В поясничном и грудном отделах бандаж снабжен профилируемыми ортопедическими вкладышами устойчивыми к деформациям. Утягивающие ленты дополнительно подгоняют бандаж к телу пациента и увеличивают натиск и стабильность ортопедических вкладышей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Показания

- При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов
- нестабильности позвоночника
- после переломов позвоночника на фоне остеопороза (при предварительной консультации с врачом)
- дископатия поясничного отдела
- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор
- на фоне ишиаса
- при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника
- при остеопорозе.



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см
Высота	Высота	Высота	Высота	Высота	Высота
43 см	46 см	49 см	52 см	55 см	55 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-22 Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 32 см, 6 см). Масса 0,261 кг
ОТ-22 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 6 см). Масса 0,290 кг
ОТ-22 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 40 см, 6 см). Масса 0,322 кг
ОТ-22 Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 44 см, 6 см). Масса 0,353 кг
ОТ-22 Размер XXL	Д x Ш x Г (34 см, 48 см, 6 см). Масса 0,390 кг
ОТ-22 Размер XXXL	Д x Ш x Г (37 см, 52 см, 6 см). Масса 0,426 кг

ОТ-18					
Общее описание Изделие представляет собой текстильную эластичную основу в виде лент. На спине закреплены упругие элементы – ортопедические накладки, которые в шадающем режиме поддерживают осанку в естественно правильном положении. Ортез выполнен из эластичных лент и спинной накладки над хребтом, снабжённой четырьмя упругими ортопедическими вставками. Спинная накладка соединена с эластичными плечевыми лентами, которые проходят через плечо и скрещиваются в области поясничного отдела и застегиваются на животе.					
Показания • Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства, • болезненных состояний грудного отдела позвоночника, • увеличенного грудного кифоза, • необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.					
Технические характеристики					
Размер XS Обхват груди 45-50 см	Размер S Обхват груди 50-60 см	Размер М Обхват груди 60-70 см	Размер L Обхват груди 70-80 см	Размер XL Обхват груди 80-90 см	Размер XXL Обхват груди 90-100 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-18 Размер XS	Д х Ш х Г (31 см, 26 см, 2 см). Масса 0,312 кг
ОТ-18 Размер S	Д х Ш х Г (33 см, 31 см, 2 см). Масса 0,346 кг
ОТ-18 Размер M	Д х Ш х Г (33 см, 36 см, 2 см). Масса 0,385 кг
ОТ-18 Размер L	Д х Ш х Г (33 см, 42 см, 2 см). Масса 0,428 кг
ОТ-18 Размер XL	Д х Ш х Г (37 см, 48 см, 2 см). Масса 0,471 кг
ОТ-18 Размер XXL	Д х Ш х Г (41 см, 54 см, 2 см). Масса 0,518 кг

4ARMY-TX-01		
Общее описание Корсет туловища предназначен для быстрого наложения после операции или травмы. Очень хорошо подходит в качестве поддержки при хронических и длительных заболеваниях позвоночника, обеспечивает жесткую всестороннюю поддержку позвоночника от грудного отдела (область лопаток T2/T3) и вниз, до поясничного отдела хребта (S1). В передней части ортеза есть брюшная пелота (подушка) с карманом, в котором находится анатомически профилированная пластиковая вставка. В изделии имеется легкая в установке система грудных пелот с ремнями и подтяжками. К боковым накладкам присоединены системы быстрых шнуровок, благодаря которым одним движением можно подогнать изделие к телу пациента и достичь нужной окружной компрессии. Показания • При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового и грудного отделов • при дегенеративных изменениях пояснично-крестцового отдела позвоночника • дископатия поясничного отдела, • после операций поясничного отдела позвоночника • после снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор Технические характеристики		
Размер S/M	Размер L/XL	
Обхват талии	Обхват талии	Размер XXL/XXXL
65-85 см	85-110 см	Обхват талии
		110-145 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-TX-01 Размер S/M	Д x Ш x Г (27 см, 15 см, 5 см). Масса 0,271 кг
4ARMY-TX-01 Размер L/XL	Д x Ш x Г (27 см, 18 см, 5 см). Масса 0,301 кг
4ARMY-TX-01 Размер XXL/XXXL	Д x Ш x Г (27 см, 23 см, 5 см). Масса 0,352 кг

ОТ-09

Общее описание

Низкий полужесткий бандаж ОТ-09 изготовлен из легкой хлопковой ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать. В пояснично-крестцовой области находятся ортопедические вкладыши и поясничная пелота. Применение в ортезе ортопедических вкладышей и регулируемой поясничной пелоты дает отличную стабилизацию, укрепление и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. В передней части ортеза прикреплена дополнительная сжимающая лента, которая предохраняет случайное расстегивание ортеза и вместе с тем увеличивает безопасность и комфорт использования изделия.



Показания

- после перенесенных травм лучезапястного сустава и предплечья (также после перенесенных переломов кости предплечья)
- при воспалительных процессах сухожильных сумок;
- при растяжениях, дегенеративных и воспалительных изменениях на уровне лучезапястного сустава;
- при микротравмах сухожилия, а также дегенеративных изменениях сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости (локоть теннисиста);
- для профилактики в спорте: увеличивает силу зажима и удара, предохраняет от контузий и разрыва связок — теннис, тяжелая атлетика, волейбол, цикло кросс.

Технические характеристики

Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-09 Размер М	Д х Ш х Г (26 см, 36,5 см, 6 см). Масса 0,363 кг
ОТ-09 Размер L	Д х Ш х Г (26 см, 41 см, 6 см). Масса 0,403 кг
ОТ-09 Размер XL	Д х Ш х Г (28 см, 45,5 см, 6 см). Масса 0,443 кг
ОТ-09 Размер XXL	Д х Ш х Г (30 см, 50,5 см, 6 см). Масса 0,488 кг
ОТ-09 Размер XXXL	Д х Ш х Г (30 см, 56 см, 6 см). Масса 0,526 кг

ОТ-08				
Общее описание Орtez позвоночника ОТ-08 нужно применять во время повышенной активности при хронических или длительных болях позвоночника. Ежедневная активность, такая как стояния, приседание, поднятие тяжестей или сгибание создают нагрузки на позвоночник. Применение ортеза с анатомическими алюминиевыми вставками позволяет перенести воздействие сил с позвоночника на металлические вставки. Благодаря этому, диски, связки и мышцы позвоночника принимают на себя значительно меньшие нагрузки. Показания • боль в пояснице • травмы нижней части спины / переломы • растяжение в нижней части спины • плохая осанка • беременность • артрит • грыжа межпозвоночного диска • ишиас • после операций. Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-08 Размер М	Д x Ш x Г (33 см, 37,5 см, 2 см). Масса 0,385 кг
ОТ-08 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 42 см, 2 см). Масса 0,428 кг
ОТ-08 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 46,5 см, 2 см). Масса 0,471 кг
ОТ-08 Размер XXL	Д x Ш x Г (33 см, 52 см, 2 см). Масса 0,518 кг
ОТ-08 Размер XXXL	Д x Ш x Г (33 см, 57,5 см, 2 см). Масса 0,570 кг

AM-GJ-02**Общее описание**

Ортез имеет специальную анатомическую форму, прекрасно адаптируется к анатомии пользователя и не скользит во время повышенной физической активности. Пояс для туловища AM-GJ-02 по всей его поверхности имеет функцию натяжения, поэтому идеально подойдет к любой фигуре. Плавная регулировка сжатия позволяет активно контролировать температуру тела, что делает тренировки намного эффективнее. Ортез сохраняет кожу теплой, увеличивая эффект упражнений в брюшной полости. Он отлично подходит для повышения результатов среди спортсменов-любителей и профессионалов популярной тренировки АБС.

Показания

- интенсивная спортивная тренировка (ABS-тренировка, кросс-фит, фитнес)
- избыточный масса
- болевые синдромы в поясничном и крестцовом отделах
- перегрузка поясничного и крестцового отделов
- защита внутренних органов при езде на мотоцикле / велосипеде.

Технические характеристики**Размер универсальный**

Обхват в поясе - мин 65 см — макс 100 см

X-Size - мин 100,5 см — макс 130 см

Габаритные размеры и масса

AM-GJ-02 Размер универсальный	Д x Ш x Г (37 см, 33 см, 13 см). Масса 0,843 кг
AM-GJ-02 Размер X-Size	Д x Ш x Г (50 см, 40 см, 13 см). Масса 1,015 кг

АМ-DPB (детский)				
Общее описание Детский, поясничный ортез АМ-DPB предназначен для стабилизации и разгрузки нижних отделов позвоночника. Достаточно нескольких минут применения ортеза 3-4 раз в течение дня, чтобы ваш ребенок почувствовал себя лучше, а его мышцы почувствовали значительное облегчение.				
Показания • Укрепления позвоночника в области поясницы и крестца. • Стабилизации позвоночника • Снятия мышечной нагрузки.				
Технические характеристики				
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
72-86 см	82-96 см	92-106 см	96-116 см	112-126 см

Габаритные размеры и масса

АМ-DPB (детский) Размер М	Д x Ш x Г (8 см, 17 см, 2 см). Масса 0,022 кг
АМ-DPB (детский) Размер L	Д x Ш x Г (8 см, 19 см, 2 см). Масса 0,024 кг
АМ-DPB (детский) Размер XL	Д x Ш x Г (10 см, 21 см, 2 см). Масса 0,027 кг
АМ-DPB (детский) Размер XXL	Д x Ш x Г (10 см, 23 см, 2 см). Масса 0,030 кг
АМ-DPB (детский) Размер XXXL	Д x Ш x Г (12 см, 25 см, 2 см). Масса 0,033 кг

АМ-DPZ (детский)	
Общее описание Ортез АМ-DPZ имеет анатомическую форму, алюминиевые усилители и затяжные ремни для полной стабилизации и сжатия грудно-пояснично-крестцового отдела. Модель АМ-DPZ - эффективное ортопедическое средство, применяемое для поддержания позвоночника в анатомически правильном положении. Бандаж прост и комфортен в применении. Из-за малого массаа и мягкой структуры, детям будет удобно в повседневной жизни, что заметно скажется на сроке восстановления.	
Показания • Фиксация позвоночника средней степени жесткости в области поясницы и крестца • Компенсация мышечной нагрузки • Укрепление и стабилизация.	
	

Технические характеристики	
Размер 1 Обхват в поясе - 50-60 см Соответствует возрасту - 2 – 6 лет	Размер 2 Обхват в поясе - 60,5-70 см Соответствует возрасту - 6 – 12 лет

Габаритные размеры и масса

AM-DPZ (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (8 см, 17 см, 2 см). Масса 0,022 кг
AM-DPZ (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (8 см, 19 см, 2 см). Масса 0,024 кг

ОТ-38	
Общее описание Орtez ОТ-38 стабилизирует поясничный отдел позвоночника и защищает почки во время езды на мотоцикле. Пояс уменьшает боли, предотвращает их появление и улучшает двигательные возможности. Изделие имеет анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и лучше стабилизирует позвоночник. Пояс изготовлен из толстого неопрена с обложкой. Он кроме того согревает. В задней части пояса есть ортопедические вставки, которые прилегают к телу и стабилизируют позвоночник в поясничном отделе. Показания • интенсивная спортивная тренировка (тренировка ABS, cross fit, фитнес) • излишек масса • пояснично-крестцовые болевые синдромы, • пояснично-крестцовые перегрузки, • защита внутренних органов при езде на мотоцикле/ велосипеде Технические характеристики Размер универсальный Обхват в поясе - мин 65 см — макс 100 см X-Size - мин 100,5 см — макс 130 см	

Габаритные размеры и масса

ОТ-38 Размер универсальный	Д x Ш x Г (27 см, 40 см, 4 см). Масса 0,411 кг
ОТ-38 Размер X-Size	Д x Ш x Г (34 см, 51 см, 4 см). Масса 0,530

	кг
--	----

ТВ-01	
Общее описание Термальный ортез ТВ-01 обеспечивает эффективную терапию холодом, устраняя болевые ощущения и уменьшая воспаление. Открытая неопреновая ортопедическая конструкция и клапан для отвода воздуха обеспечивают отличную адгезию мешка со льдом к нижней части спины, окутывая его низкой температурой. Дробленый лед, помещается в специальный мешок тем самым создавая мгновенную "холодную повязку". Показания Болевые синдромы в пояснично-крестцовом отделе, дегенерация позвоночника, дископатия, мышечные перегрузки нижней части спины, растяжение мышц. Технические характеристики Размер универсальный	

Габаритные размеры и масса

ТВ-01 Размер универсальный	Д x Ш x Г (32 см, 10 см, 12 см). Масса 0,578 кг
----------------------------	---

PCO-T-01	
Общее описание Жилет туловища PCO-T-01 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса. Задняя неопреновая панель жилета обеспечивает дополнительную стабилизацию и снятие тяжести в области невралгических точек и костных выступов. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз	

• атаксия • дискинезия • дистония				
Технические характеристики				
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 68 — 80 см
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 31,5 — 35 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 35,5 — 40 см

Габаритные размеры и масса

PCO-T-01 Размер 1	Д x Ш x Г (30 см, 25 см, 1 см). Масса 0,274 кг
PCO-T-01 Размер 2	Д x Ш x Г (36 см, 27 см, 1 см). Масса 0,295 кг
PCO-T-01 Размер 3	Д x Ш x Г (40 см, 29 см, 1 см). Масса 0,317 кг
PCO-T-01 Размер 4	Д x Ш x Г (47 см, 29 см, 1 см). Масса 0,341 кг
PCO-T-01 Размер 5	Д x Ш x Г (50 см, 31 см, 1 см). Масса 0,365 кг

PCO-T-02				
Общее описание Жилет туловища PCO-T-02 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Изготовленный из мягкой лайкры и жесткая вставка в форме буквы «Х», изготовленная из пластика, обеспечивают глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса, дополнительно стабилизируя и снимая тяжесть в области окологривных мышц. Показания • растяжение или перегрузка локтевого сустава • ушиб локтя • перегрузка и воспаление мышц локтя и предплечья • вывих локтевого сустава • травма связки UCL (локтевая коллатеральная связка). Технические характеристики				
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 68 — 80 см
Расстояние от	Расстояние от	Расстояние от	Расстояние от	Расстояние от

большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	большого вертлуга до подмышек - 31,5 — 35 см	большого вертлуга до подмышек - 35,5 — 40 см
---	---	---	---	---

Габаритные размеры и масса

PCO-T-02 Размер 1	Д х Ш х Г (30 см, 24 см, 1 см). Масса 0,304 кг
PCO-T-02 Размер 2	Д х Ш х Г (36 см, 26 см, 1 см). Масса 0,326 кг
PCO-T-02 Размер 3	Д х Ш х Г (41 см, 28 см, 1 см). Масса 0,351 кг
PCO-T-02 Размер 4	Д х Ш х Г (44 см, 28 см, 1 см). Масса 0,3669 кг
PCO-T-02 Размер 5	Д х Ш х Г (50 см, 30 см, 1 см). Масса 0,402 кг

PCO-T-03				
Общее описание Жилет туловища PCO-T-03 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Изготовленный из мягкой лайкры и жесткой задней термопластичной пластины, обеспечивает глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса, дополнительно стабилизируя и снимая тяжесть в области околопозвоночных мышц. Эластичность и глубокая компрессия лайкры обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония Технические характеристики				
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 68 — 80 см
Расстояние от большого вертлуга до	Расстояние от большого вертлуга до	Расстояние от большого вертлуга до	Расстояние от большого вертлуга до	Расстояние от большого вертлуга до

подмышек - 17 — 22 см	подмышек - 22,5 — 27 см	подмышек - 27,5 — 31 см	подмышек - 31,5 — 35 см	подмышек - 35,5 — 40 см
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Габаритные размеры и масса

PCO-T-03 Размер 1	Д x Ш x Г (30 см, 24 см, 2 см). Масса 0,495 кг
PCO-T-03 Размер 2	Д x Ш x Г (36 см, 26 см, 2 см). Масса 0,532 кг
PCO-T-03 Размер 3	Д x Ш x Г (40 см, 28 см, 2 см). Масса 0,572 кг
PCO-T-03 Размер 4	Д x Ш x Г (48 см, 28 см, 2 см). Масса 0,615 кг
PCO-T-03 Размер 5	Д x Ш x Г (50 см, 30 см, 2 см). Масса 0,657 кг

PCO-T-04				
Общее описание Жилет туловища PCO-T-04 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Изделие изготавливается на заказ по индивидуальному размеру. Корсет обеспечивает стабилизацию как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскости, поэтому является идеальным решением при ортопедических и неврологических заболеваниях. Дополнительно лайкра обеспечивает эластичную и глубокую компрессию, что положительно влияет на улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшает произвольные движения ребенка. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония Технические характеристики				
Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Обхват туловища - 68 — 80 см
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17	Расстояние от большого вертлуга до подмышек -	Расстояние от большого вертлуга до подмышек -	Расстояние от большого вертлуга до подмышек -	Расстояние от большого вертлуга до подмышек -

— 22 см	22,5 — 27 см	27,5 — 31 см	31,5 — 35 см	35,5 — 40 см
---------	--------------	--------------	--------------	--------------

Габаритные размеры и масса

PCO-T-04 Размер 1	Д x Ш x Г (30 см, 28,5 см, 3 см). Масса 0,504 кг
PCO-T-04 Размер 2	Д x Ш x Г (36 см, 30,5 см, 3 см). Масса 0,542 кг
PCO-T-04 Размер 3	Д x Ш x Г (41 см, 33 см, 3 см). Масса 0,593 кг
PCO-T-04 Размер 4	Д x Ш x Г (44 см, 33 см, 3 см). Масса 0,627 кг
PCO-T-04 Размер 5	Д x Ш x Г (50 см, 35,5 см, 3 см). Масса 0,671 кг

PCO-T-09	
Общее описание Компрессионный ортез туловища длинный без рукавов PCO-T-09 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Обеспечивает стабилизацию туловища, таза и бедренного пояса, улучшает равновесие, координацию и ощущение своего тела пациентом. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают непроизвольные движения ребенка. Компрессионный жилет туловища длинный с короткими рукавами PCO-T-09 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики	

Размер 1	Размер 2	Размер 3	
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	
Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди.			
Версия рекомендуется для детей грудного возраста.			

Габаритные размеры и масса

PCO-T-09 Размер 1	Д x Ш x Г (53 см, 22 см, 1 см). Масса 0,1 кг
PCO-T-09 Размер 2	Д x Ш x Г (42 см, 27 см, 1 см). Масса 0,116 кг
PCO-T-09 Размер 3	Д x Ш x Г (63 см, 34 см, 1 см). Масса 0,13 кг

PCO-T-10	
Общее описание Длинный компрессионный ортез туловища с коротким рукавом PCO-T-10 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу верхних частей тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка. Длинный компрессионный жилет туловища с коротким рукавом PCO-T-10 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия	

• дистония • аутизм • синдром Ретта			
Технические характеристики			
Размер 1	Размер 2	Размер 3	
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	
Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди.			
Версия рекомендуется для детей грудного возраста.			

Габаритные размеры и масса

PCO-T-10 Размер 1	Д x Ш x Г (53 см, 43 см, 1 см). Масса 0,144 кг
PCO-T-10 Размер 2	Д x Ш x Г (42 см, 49 см, 1 см). Масса 0,154 кг
PCO-T-10 Размер 3	Д x Ш x Г (63 см, 55 см, 1 см). Масса 0,17 кг

PCO-T-11	
Общее описание Компрессионный ортез туловища PCO-T-11 это жилет, предназначенный для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу верхних частей тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Длинный компрессионный жилет туловища с длинным рукавом PCO-T-11 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт)	

• ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта			
Технические характеристики			
Размер 1 Обхват туловища - 40 — 50 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Размер 2 Обхват туловища - 48 — 65 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Размер 3 Обхват туловища - 60 — 70 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	
Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди. Версия рекомендуется для детей грудного возраста.			

Габаритные размеры и масса

PCO-T-11 Размер 1	Д x Ш x Г (33 см, 43 см, 1 см). Масса 0,16 кг
PCO-T-11 Размер 2	Д x Ш x Г (42 см, 49 см, 1 см). Масса 0,175 кг
PCO-T-11 Размер 3	Д x Ш x Г (63 см, 55 см, 1 см). Масса 0,185 кг

PCO-T-16	
Общее описание Компрессионный ортез туловища без рукавов PCO-T-16 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу постуральных и околопозвоночных мышц, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Компрессионный жилет туловища безрукавка PCO-T-16 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов.	
Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт)	

• ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики			
Размер 1 Обхват туловища - 40 — 50 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Размер 2 Обхват туловища - 48 — 65 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Размер 3 Обхват туловища - 60 — 70 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	
Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди. Версия рекомендуется для детей грудного возраста.			

Габаритные размеры и масса

PCO-T-16 Размер 1	Д х Ш х Г (35 см, 22 см, 1 см). Масса 0,09 кг
PCO-T-16 Размер 2	Д х Ш х Г (45 см, 27 см, 1 см). Масса 0,1 кг
PCO-T-16 Размер 3	Д х Ш х Г (53 см, 34 см, 1 см). Масса 0,15 кг

PCO-T-17	
Общее описание Компрессионный ортез туловища с коротким рукавом PCO-T-17 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу верхних частей тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка, главным образом в области туловища, спины и плечевого пояса. Компрессионный жилет туловища с коротким рукавом PCO-T-17 следует использовать во	

время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики			
Размер 1	Размер 2	Размер 3	
Обхват туловища - 40 — 50 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Обхват туловища - 48 — 65 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Обхват туловища - 60 — 70 см Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см	
Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди. Версия рекомендуется для детей грудного возраста.			

Габаритные размеры и масса

PCO-T-17 Размер 1	Д x Ш x Г (35 см, 43 см, 1 см). Масса 0,112 кг
PCO-T-17 Размер 2	Д x Ш x Г (45 см, 49 см, 1 см). Масса 0,122 кг
PCO-T-17 Размер 3	Д x Ш x Г (53 см, 55 см, 1 см). Масса 0,137 кг

PCO-T-18	
Общее описание Короткий компрессионный ортез туловища с длинным рукавом PCO-T-18 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу верхних частей тела, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Короткий компрессионный жилет туловища с длинным рукавом PCO-T-18 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Показания	

- детский церебральный паралич (ДЦП)
- расщепление позвоночника
- синдром Дауна
- расстройство сенсорной интеграции (СИ)
- повышенный мышечный тонус (пмт)
- ослабленный мышечный тонус (омт)
- спастичность
- атетоз
- атаксия
- дискинезия
- дистония
- аутизм
- синдром Ретта

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см

Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди.

Версия рекомендуется для детей грудного возраста.

Габаритные размеры и масса

PCO-T-18 Размер 1	Д x Ш x Г (35 см, 43 см, 1 см). Масса 0,14 кг
PCO-T-18 Размер 2	Д x Ш x Г (45 см, 49 см, 1 см). Масса 0,15 кг
PCO-T-18 Размер 3	Д x Ш x Г (53 см, 55 см, 1 см). Масса 0,16,5 кг

PCO-T-23

Общее описание

Компрессионный ортез туловища типа боди без рукавов PCO-T-23 это жилет туловища, предназначенный для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу постуральных и околопозвоночных мышц и таза, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Компрессионный жилет туловища без рукавов PCO-T-23 следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений,

нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка, главным образом в области туловища и таза. Компрессионное боди PCO-T-23 обеспечивает динамичную компрессию таза, улучшая постральную стабилизацию и походку ребенка.

Показания

- детский церебральный паралич (ДЦП)
- расщепление позвоночника
- синдром Дауна
- расстройство сенсорной интеграции (СИ)
- повышенный мышечный тонус (пмт)
- ослабленный мышечный тонус (омт)
- спастичность
- атетоз
- атаксия
- дискинезия
- дистония
- аутизм
- синдром Ретта

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см

Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди.

Версия рекомендуется для детей грудного возраста.



Габаритные размеры и масса

PCO-T-23 Размер 1	Д x Ш x Г (47 см, 22 см, 1 см). 0,099 кг
PCO-T-23 Размер 2	Д x Ш x Г (60 см, 27 см, 1 см). 0,109 кг
PCO-T-23 Размер 3	Д x Ш x Г (67 см, 34 см, 1 см). 0,12 кг

Общее описание

Компрессионный ортез туловища типа боди с коротким рукавом PCO-T-24 предназначен для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу верхних частей тела и таза, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Изготовленный из мягкой лайкры, он обеспечивает глубокую стержневую компрессию и стабилизацию мышечного тонуса. Эластичность и глубокая компрессия обеспечивают улучшение равновесия тела, а также значительно уменьшают произвольные движения ребенка, главным образом в области туловища, спины и плечевого пояса. Компрессионное боди с коротким рукавом следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Компрессионный ортез обеспечивает динамичную компрессию таза, улучшая поструральную стабилизацию и походку ребенка.



Показания

- детский церебральный паралич (ДЦП)
- расщепление позвоночника
- синдром Дауна
- расстройство сенсорной интеграции (СИ)
- повышенный мышечный тонус (пмт)
- ослабленный мышечный тонус (омт)
- спастичность
- атетоз
- атаксия
- дискинезия
- дистония
- аутизм
- синдром Ретта

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см

Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди.

Версия рекомендуется для детей грудного возраста.

Габаритные размеры и масса

PCO-T-24 Размер 1	Д x Ш x Г (47 см, 43 см, 1 см). Масса 0,125 кг
PCO-T-24 Размер 2	Д x Ш x Г (60 см, 49 см, 1 см). Масса 0,134 кг
PCO-T-24 Размер 3	Д x Ш x Г (67 см, 55 см, 1 см). Масса 0,15 кг

PCO-T-25											
Общее описание Компрессионное боди PCO-T-25 предназначено для улучшения стабилизации и контроля поведения детей с неврологическими расстройствами. Поддерживает работу верхних частей тела и таза, восполняя сенсорный дефицит маленького пациента. Компрессионное боди с длинным рукавом следует использовать во время традиционной физиотерапии и лечебных упражнений. Такое решение обеспечит ограничение произвольных движений, нормализацию мышечного тонуса и позволит достичь определенно лучших терапевтических результатов. Длинные рукава ортеза обеспечивают мышечный контроль и устранение нежелательных рефлексов в области всей верхней конечности. Показания • детский церебральный паралич (ДЦП) • расщепление позвоночника • синдром Дауна • расстройство сенсорной интеграции (СИ) • повышенный мышечный тонус (пмт) • ослабленный мышечный тонус (омт) • спастичность • атетоз • атаксия • дискинезия • дистония • аутизм • синдром Ретта Технические характеристики <table> <tr> <th>Размер 1</th><th>Размер 2</th><th>Размер 3</th></tr> <tr> <td>Обхват туловища - 40 — 50 см</td><td>Обхват туловища - 48 — 65 см</td><td>Обхват туловища - 60 — 70 см</td></tr> <tr> <td>Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см</td><td>Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см</td><td>Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см</td></tr> </table>			Размер 1	Размер 2	Размер 3	Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см
Размер 1	Размер 2	Размер 3									
Обхват туловища - 40 — 50 см	Обхват туловища - 48 — 65 см	Обхват туловища - 60 — 70 см									
Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 17 — 22 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 22,5 — 27 см	Расстояние от большого вертлуга до подмышек - 27,5 — 31 см									
Продукт доступен в версии с застежкой-молнией спереди. Версия рекомендуется для детей грудного возраста.											



Габаритные размеры и масса

PCO-T-25 Размер 1	Д x Ш x Г (47 см, 43 см, 1 см). Масса 0,15 кг
PCO-T-25 Размер 2	Д x Ш x Г (60 см, 49 см, 1 см). Масса 0,16 кг
PCO-T-25 Размер 3	Д x Ш x Г (67 см, 55 см, 1 см). Масса 0,175 кг

AM-PES-04	
Общее описание Ключичный пояс выполнен из не растягивающихся поясов и спинной пелоты. Пелота была усилена пластиной PE-LD, что позволяет лучше стабилизировать растяжение между лопатками. Ленты, соединяющие дорсальную пелоту, правильно подходят к телу пациента. Такая конструкция изделия гарантирует коррекцию дефектов осанки как у взрослых, так и у детей. Конструкция спинной пелоты вместе с вставками гарантирует, что плечевые ленты не сминаются и прилипают всей поверхностью к телу пациента. Внутренняя сторона реклинатора покрыта махровым трикотажем, благодаря которому значительно улучшается комфорт использования. Ключичный восьмеричный ортез был сделан из не растягивающихся лент и круглой спинной пелоты. Показания • Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства, • болезненных состояний грудного отдела позвоночника, • увеличенного грудного кифоза, • необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции. Технические характеристики	
Размер универсальный Обхват грудной клетки - мин 45 — макс 110 см	

Габаритные размеры и масса

AM-PES-04 Размер универсальный	Д x Ш x Г (23 см, 16 см, 5 см). Масса 0,115 кг
---------------------------------------	--

АМ-PES-03

Общее описание

Ортез плечевой области — выпрямляющий плечи АМ-PES-03 выполнен с легкой хлопковой ортопедической резины и дополнен лентой VELCRO. Очень простая конструкция изделия позволяет пациенту надеть его самостоятельно. Строго определенная эластичность резины идеально подгоняет ортез к телу пациента (подходит к каждому типу телосложения). Определенная форма изделия в области подмышечных впадин обеспечивает оптимальную стабилизацию и не раздражает кожу.

Показания

- Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
- болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
- увеличенного грудного кифоза,
- необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
65 — 70 см	75,5 — 90 см	90,5 — 100 см	100,5 — 110 см	110,5 — 120 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-03 Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 12,5 см, 5 см). Масса 0,088 кг
АМ-PES-03 Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 14 см, 5 см). Масса 0,098 кг
АМ-PES-03 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 16 см, 5 см). Масса 0,109 кг
АМ-PES-03 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 18 см, 5 см). Масса 0,120 кг
АМ-PES-03 Размер 2XL	Д x Ш x Г (28 см, 20 см, 5 см). Масса 0,132 кг

АМ-PES-03 (детский)		
Общее описание Детский ортез плечевой области АМ-PES-03 рекомендован к использованию на начальных стадиях коррекции осанки и в других случаях по назначению врача. Модель представляет собой эластичные ленты, скрещенные между собой особым образом и ленту Велкро (с эффектом липучки), использующуюся для правильной фиксации. С помощью балансировки плечевого пояса достигается выравнивание позвоночного столба. Реклинатор очень просто накладывать/снимать. Ребенок может это делать самостоятельно. Показания • круглая спина • нарушения осанки тела • асимметрия напряжения мышц туловища Технические характеристики		
Размер 1 Обхват груди - 45 – 50 см Подходит для возраста – 2-5 лет	Размер 2 Обхват груди - 50,5 – 60 см Подходит для возраста – 5-8 лет	
		Размер 3 Обхват груди - 60,5 – 70 Подходит для возраста – 8-12 лет

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-03 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (12 см, 12,5 см, 1 см). Масса 0,046 кг
АМ-PES-03 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (15 см, 15 см, 1 см). Масса 0,056 кг
АМ-PES-03 (детский) Размер 3	Д x Ш x Г (17 см, 17,5 см, 1 см). Масса 0,065 кг

АМ-PES-02	
Общее описание Корректор осанки — ключичный бандаж выполнен из нерастяжимых лент и спинной накладке. Спинная накладка укреплена вставкой из PELD, благодаря чему лучше стабилизирует отдел между лопатками. Ленты, соединяющиеся со спинной панелью соответственно подогнаны к телу пациента. Такая конструкция изделия гарантирует исправление осанки как у взрослых, как и у детей. Конструкция плечевых лент способствует тому, что они не морщатся и прилегают всей своей поверхностью к телу пациента. Нательная сторона корректора покрыта махровой трикотажной тканью, благодаря которой значительно улучшается комфорт использования. Показания • Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства, • болезненных состояний грудного отдела	

позвоночника, • увеличенного грудного кифоза, • необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции. Технические характеристики Размер универсальный Обхват грудной клетки - мин 70 — макс 120 см	
---	--

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-02 Размер универсальный	Д x Ш x Г (28 см, 18 см, 5 см). Масса 0,144 кг
---------------------------------------	--

АМ-PES-02 (детский)	
Общее описание Детский ортез туловища АМ-PES-02 имеет высокую степень износостойчивости, прост в использовании и не требует посторонней помощи для снятия/наложения. Ребенок самостоятельно может снимать/надевать, а также выстирать изделие. Регулировка с помощью велкро – длина лямок, компрессия и степень прилегания изделия изменяются с помощью липучек велкро, расположенных на верхней части спинной полоты. Функция позволяет максимально точно подогнать параметры изделия под индивидуальные потребности. Показания • недостатки осанки грудного отдела позвоночника • переломы ключицы • вывихи и другие травмы ключицы Технические характеристики	
Размер 1 Обхват груди - 45 – 50 см Подходит для возраста - 2 – 6 лет	Размер 2 Обхват груди - 50,5 – 60 см Подходит для возраста - 6 – 12 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-02 (детский) Размер 1	Д x Ш x Г (23 см, 18,5 см, 4 см). Масса 0,087 кг
АМ-PES-02 (детский) Размер 2	Д x Ш x Г (29 см, 22 см, 4 см). Масса 0,105 кг

АМ-ТХ-04

Общее описание

Ортез на клиновидную грудь Carinatum Am-tx-04 – ортопедическое приспособление, специально разработанное для восстановления анатомически правильной формы грудной клетки. Изделие представляет собой:

- Две металлические пластины (передняя и задняя) которые обеспечивают коррекцию.
- Неопреновые прокладки – подушечки из пены, обтянутые износостойчивой искусственной кожей, закреплены на внутренней части металлических пластин.
- Фиксирующие ремни – соединяют переднюю и заднюю пластины, образуя единое коррекционное устройство.
- Застежки.



Показания

- куриная грудная клетка

Технические характеристики

Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6
Ширина спины	Ширина спины	Ширина спины	Ширина спины	Ширина спины	Ширина спины
высота лопаток измеряется по прямой линии	высота лопаток измеряется по прямой линии	высота лопаток измеряется по прямой линии	высота лопаток измеряется по прямой линии	высота лопаток измеряется по прямой линии	высота лопаток измеряется по прямой линии
18 – 20 см	20,5 – 24 см	24,5 – 27 см	27,5 – 30 см	30,5 – 33 см	33,5 – 36 см
Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди
40-70 см	55-80 см	60-90 см	65-100 см	70-105 см	75 – 110 см
Возраст	Возраст	Возраст	Возраст	Возраст	Возраст
2 – 4 лет	4 – 6 лет	6 – 8 лет	8 – 10 лет	10 – 12 лет	< 12 лет

Габаритные размеры и масса

АМ-ТХ-04 Размер 1	Д x Ш x Г (31 см, 10,5 см, 4 см). Масса 0,362 кг
АМ-ТХ-04 Размер 2	Д x Ш x Г (31 см, 12 см, 4 см). Масса 0,394 кг
АМ-ТХ-04 Размер 3	Д x Ш x Г (33 см, 13,5 см, 4 см). Масса 0,428 кг

АМ-ТХ-04 Размер 4	Д х Ш х Г (33 см, 15 см, 4 см). Масса 0,465 кг
АМ-ТХ-04 Размер 5	Д х Ш х Г (35 см, 16,5 см, 4 см). Масса 0,502 кг
АМ-ТХ-04 Размер 6	Д х Ш х Г (35 см, 18 см, 4 см). Масса 0,542 кг

АМ-ТХ-05	
Общее описание Орtez АМ-ТХ-05 состоит из неэластичных ремней, соединенных с пелотой на спине. Ремни по всей длине имеют велкро-поверхность для липучек и заканчиваются застежками-липучками велкро, что обеспечивает широкий диапазон регулировки изделия. Благодаря такому подходу ортез поддерживает правильную осанку и иммобилизует ключицу, при этом не ограничивая подвижность верхней конечности. На пелоте есть верхняя пряжка для регулировки высоты изделия и боковые пряжки для регулировки компрессии. Показания 1. травмы ключицы, не требующие хирургического вмешательства, 2. боли в области грудного отдела позвоночника, 3. увеличенный торакальный кифоз, 4. необходимость коррекции без хирургического вмешательства. Технические характеристик	
Размер универсальный Обхват грудной клетки - мин 65 — макс 120 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-ТХ-05 Размер универсальный	Д х Ш х Г (21 см, 28 см, 7 см). Масса 0,142 кг
--------------------------------------	--

ОТ-21	
Общее описание Очень простая конструкция изделия позволяет пациенту надеть его самостоятельно. Строго определенная эластичность резины идеально подгоняет ортез к телу пациента (подходит к каждому типу телосложения). Определенная форма изделия в области подмышечных впадин обеспечивает оптимальную стабилизацию и не раздражает кожу. Изделие очень комфортно для кожи пациента – корректор выполнен из специального материала, покрытого велюром, а с лицевой стороны махровой трикотажной тканью,	

которая не раздражает кожу пациента.

Показания

- Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
- болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
- увеличенного грудного кифоза,
- необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

Технические характеристик



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
65 — 70 см	75,5 — 90 см	90,5 — 100 см	100,5 — 110 см	110,5 — 120 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-21 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 31 см, 4 см). Масса 0,255 кг
ОТ-21 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 35,5 см, 4 см). Масса 0,284 кг
ОТ-21 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 40 см, 4 см). Масса 0,315 кг
ОТ-21 Размер XL	Д x Ш x Г (29 см, 44,5 см, 4 см). Масса 0,346 кг
ОТ-21 Размер 2XL	Д x Ш x Г (31 см, 49 см, 4 см). Масса 0,381 кг

ОТ-20

Общее описание

Ортез ОТ-20 состоит из неэластичных ремней, соединенных с пелотой на спине. Ремни по всей длине имеют велкро-поверхность для липучек и заканчиваются застежками-липучками велкро, что обеспечивает широкий диапазон регулировки изделия. Благодаря такому подходу ортез ОТ-20 поддерживает правильную осанку и иммобилизует ключицу, при этом не ограничивая подвижность верхней конечности.

Показания

- Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
- болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
- увеличенного грудного кифоза,
- необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

Технические характеристик



Размер универсальный

Обхват грудной клетки - мин 45 — макс 110 см

Габаритные размеры и масса


ОТ-20 Размер универсальный

Д x Ш x Г (28 см, 39 см, 4 см). Масса 0,203 кг

ОТ-19

Общее описание

Корректор осанки выполнен из эластичных лент и спинной накладкой над хребтом, снабжённой четырьмя упругими ортопедическими вставками. Спинная накладка соединена с эластичными плечевыми лентами, которые проходят через плечо и скрещиваются в области поясничного отдела и застегиваются на животе. Такая конструкция изделия гарантирует идеальное исправление осанки как у взрослых, как и у детей. Специальная конструкция плечевых лент способствует тому, что они не морщатся и прилегают всей своей поверхностью к телу пациента.

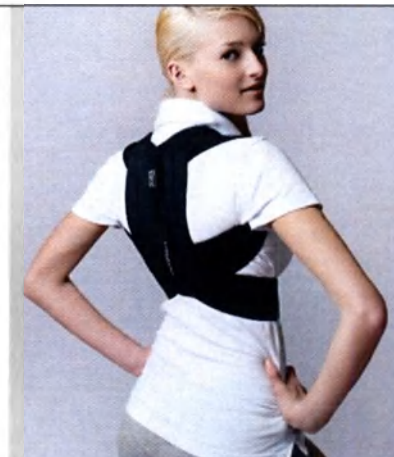

Показания

- Травм ключицы, не требующих хирургического и ортопедического вмешательства,
- болезненных состояний грудного отдела позвоночника,
- увеличенного грудного кифоза,
- необходимости проведения коррекции не требующей хирургической интервенции.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
70 — 80 см	80,5 — 90 см	90,5 — 100 см	100,5 — 125 см	125,5 — 140 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-19 Размер S	Д x Ш x Г (25 см, 35 см, 5 см). Масса 0,364 кг
ОТ-19 Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 40 см, 5 см). Масса 0,403 кг
ОТ-19 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 45 см, 5 см). Масса 0,448 кг
ОТ-19 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 50 см, 5 см). Масса 0,493 кг
ОТ-19 Размер XXL	Д x Ш x Г (37 см, 55 см, 5 см). Масса 0,542 кг

AM-PES-08

Общее описание

Ортез AM-PES-08 стабилизирует позвоночник при переломах позвонков, поддерживает ослабленные мышцы туловища, а шины анатомически адаптированы к индивидуальной кривизне позвоночника. Стабилизирующие ремни не растягиваются, а передние застежки сделаны так, чтобы их было легко застегивать. Типическая у пациентов с остеопорозом тенденция к шатанию уменьшается, что уменьшает риск падений и травм. Усиление мышц туловища приводит к выравниванию туловища.

Показания

- остеопоротические переломы позвоночника
- деформированные позвонки
- острые боли в пояснично-крестцовом отделе
- многоуровневая дископатия
- нестабильность позвоночника
- поясничный спондилолистез
- ишиас
- дегенеративные патологии в пояснично-крестцовом и торакальном отделе
- после операции (ортопедия, нейрохирургия).



Технические характеристики

XS	Обхват в поясе мин 65 см — макс 125 см	Расстояние от Th3 до копчика - 42-45 см
S		Расстояние от Th3 до копчика - 45,5-48 см
M		Расстояние от Th3 до копчика - 48,5-51 см
L	Обхват в поясе мин 65 см — макс 145 см	Расстояние от Th3 до копчика - 51,5-54 см
XL		Расстояние от Th3 до копчика - 54,5-57 см
XXL		Расстояние от Th3 до копчика - 57,5-60 см и более

Габаритные размеры и масса

AM-PES-08 Размер XS	Д x Ш x Г (11 см, 35,5 см, 3 см). Масса 0,297 кг
AM-PES-08 Размер S	Д x Ш x Г (12 см, 35,5 см, 3 см). Масса 0,319 кг
AM-PES-08 Размер M	Д x Ш x Г (13 см, 35,5 см, 3 см). Масса 0,343 кг

AM-PES-08 Размер L	Д x Ш x Г (15 см, 42 см, 3 см). Масса 0,413 кг
AM-PES-08 Размер XL	Д x Ш x Г (18 см, 42 см, 3 см). Масса 0,442 кг
AM-PES-08 Размер XXL	Д x Ш x Г (21 см, 42 см, 3 см). Масса 0,473 кг

AM-PCS	
Общее описание Ортез AM-PCS обездвиживает ключицу и предотвращает скольжение осколков. Его применение в течение 4-5 недель позволяет костям срастаться. Ортез обеспечивает широкий диапазон регулировки. Ортез слегка эластичен, обеспечивает терапевтическое сжатие сустава, улучшая абсорбцию экссудатов. Терапевтически иммобилизация ключиц позволяет обеспечить комфортную и эффективную стабилизацию. Показания • перелом ключицы • - вывих плечо-ключичного сустава • - необходимость проведения коррекции, не требующей хирургического вмешательства Технические характеристик Размер универсальный Обхват груди - мин 70 – макс 90 см X-Size (Обхват груди)- Мин 90,5 – макс120 см	

Габаритные размеры и масса

AM-PCS Размер универсальный	Д x Ш x Г (25 см, 17 см, 4 см). Масса 0,065 кг
------------------------------------	--

AM-PES-09	
Общее описание Ортез спины AM-PES-09 использует физиологические свойства мозга. Корректор осанки провоцирует правильное выравнивание плечевого пояса и выравнивание лопаток. Ортез растягивает контрактурные мышцы грудной клетки и обеспечивает правильное выравнивание искривлений позвоночника. Ортез туловища AM-PES-09 выполнен в одном универсальном размере. Материал UniPren растягивается по всей поверхности, благодаря чему вы идеально подходите к любому типу фигуры. Показания • неправильная осанка тела • травмы ключицы (переломы, вывихи) • аномальные кривизны позвоночника • необходимость проведения коррекции, не	

требующей хирургического вмешательства	
Технические характеристик	
Размер универсальный	
Обхват груди - Мин 70 – макс 120 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-PES-09 Размер универсальный	Д x Ш x Г (28 см, 12 см, 3 см). Масса 0,307 кг
---------------------------------------	--

АМ-РР				
Общее описание Бандаж АМ-РР изготовлен при помощи специальных цилиндрических верстаков, которые позволяют изготавливать замкнутые ортезы. Основой тканей для такой продукции является хлопок, а эластичность достигается при помощи добавления лайкры. Бесшовная структура и мягкость дышащей хлопковой ткани позволяет носить бандаж даже после кесарева сечения. Показания • помогает вернуть прежнюю фигуру, плоский живот • поддерживает спину, укрепляет мышцы • подходит после кесарева сечения • уменьшает растяжки, укрепляет кожу • поддерживает осанку в положении стоя и сидя. Технические характеристики				
Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РР Размер S	Д x Ш x Г (27 см, 15,5 см, 1 см). Масса 0.157 кг
АМ-РР Размер M	Д x Ш x Г (27 см, 18 см, 1 см). Масса 0.175 кг
АМ-РР Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 20,5 см, 1 см). Масса 0.193 кг
АМ-РР Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 23 см, 1 см). Масса 0.212 кг
АМ-РР Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 25,5 см, 1 см). Масса 0.233 кг

AM-1PP

Общее описание

Грыжевой пояс односторонний поддерживает небольшую правостороннюю или левостороннюю паховую грыжу у пациентов, которым запрещена операция, ограничивает расширение существующей паховой грыжи прямой или косой (право- или левосторонней). Не следует использовать в случае непроходимости грыжи, поскольку пелота может представлять опасность повреждения кишечной стенки!

Ортез могут носить и мужчины, и женщины.

- Грыжевой ремень правосторонний
- Грыжевой ремень левосторонний

Показания

- ограничивает расширение существующей паховой грыжи прямой или косой (право- или левосторонней)
- в качестве защиты паха после операции, в случае слабого и вялого мио фасциального аппарата не дает перемещаться кишечнику наружу кольца пахового канала,
- поддерживает небольшую правостороннюю или левостороннюю паховую грыжу у пациентов, которым запрещена операция.

Технические характеристики



Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват бедер в самом широком месте	Обхват бедер в самом широком месте	Обхват бедер в самом широком месте	Обхват бедер в самом широком месте
86-94 см	94,5-102 см	102,5-110 см	110,5-118 см

Габаритные размеры и масса

AM-1PP Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 21 см, 3 см). Вем 0,11 кг
AM-1PP Размер L	Д x Ш x Г (16 см, 23 см, 3 см). Вем 0,12 кг
AM-1PP Размер XL	Д x Ш x Г (16 см, 25 см, 3 см). Вем 0,13 кг
AM-1PP Размер XXL	Д x Ш x Г (16 см, 27 см, 3 см). Вем 0,14 кг

АМ-2РР			
Общее описание В случае образования грыжи, особенно пока операция еще не нужна, может подойти двусторонний грыжевой ремень паха АМ-2РР. Грыжевой пояс двухсторонний изготовлен из эластичного материала, кроме того, в изделии есть ремни паха для точной стабилизации ортеза на теле. Ортез могут носить и мужчины, и женщины в качестве защиты паха после операции, в случае слабого и вялого миофасциального аппарата не дает перемещаться кишечнику наружу кольца пахового канала. Показания • ограничивает расширение существующей паховой грыжи прямой или косой (право- или левосторонней) • в качестве защиты паха после операции, в случае слабого и вялого мио фасциального аппарата не дает перемещаться кишечнику наружу кольца пахового канала, • поддерживает небольшую правостороннюю или левостороннюю паховую грыжу у пациентов, которым запрещена операция. Технические характеристики			
Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Обхват бедер в самом широком месте	Обхват бедер в самом широком месте	Обхват бедер в самом широком месте	Обхват бедер в самом широком месте
86-94 см	94,5-102 см	102,5-110 см	110,5-118 см

Габаритные размеры и масса

АМ-2РР Размер М	Д х Ш х Г (16 см, 23 см, 5 см). Масса 0,136 кг
АМ-2РР Размер L	Д х Ш х Г (16 см, 25 см, 5 см). Масса 0,149 кг
АМ-2РР Размер XL	Д х Ш х Г (16 см, 27 см, 5 см). Масса 0,161 кг
АМ-2РР Размер XXL	Д х Ш х Г (16 см, 29 см, 5 см). Масса 0,174 кг

АМ-РРВ

Общее описание

Грыжевой пояс Ам-ррв предназначен для поддержания брюшной грыжи. Изделие представляет собой фиксирующий ремень, на котором закреплена мягкая пелота с гнездом для силиконовой подушечки. Ремень имеет универсальный размер и простые застежки, благодаря чему можно отрегулировать степень натяжения и объем. Силиконовая подушечка выпускается в двух размерах Мини и Макси. Пояс не рекомендован к использованию, если грыжа несокращаемая и после операций с использованием синтетических материалов.



Показания

- ограничение расширения существующих грыж живота
- поддержание брюшной грыжи пациентов, которым нельзя делать операцию

Технические характеристики

Размер – Универсальный

Обхват в поясе на уровне пупка - мин 60 см — макс 145 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РРВ Размер универсальный

Д x Ш x Г (15 см, 28 см, 6 см). Масса 0,270 кг

АМ-РРВ (детский)

Общее описание

Детский брюшной грыжевой пояс АМ-РРВ оснащен безопасной мягкой силиконовой пелотой, которая защищает область пупка и предотвращает выпадение и углубление грыжи. Ее анатомическая форма прекрасно окружает область пупка и отменяет грыжу даже при ее больших размерах. Функция натяжения материала позволяет использовать ремень в универсальном размере и обеспечивает широкую регулировку.

Показания

- брюшная грыжа

Технические характеристики



Размер – Универсальный

Окружность талии на уровне пупка - мин 30 см – макс 52 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РРВ (детский) Размер универсальный	Д x Ш x Г (8 см, 19 см, 2 см). Масса 0,024 кг
--	--

АМ-РС		
Общее описание Бандаж АМ-РС изготовлен и спроектирован так, чтобы быть очень универсальным. Он адаптируется к фигуре, поддерживает живот. Застежки изделия выполнены асимметричным образом, что позволяет более плотно прилегать изделию к телу пациента. Эластичный пояс для беременных уменьшает боль в спине во время беременности. Удерживая обильный живот, использование пояса приносит облегчение. Показания • беременность, особенно в первые месяцы • ослабление связок суставов брюшной полости и таза, • неправильная осанка (смещенный вперед центр тяжести). Технические характеристики		
Размер М	Размер L	
Обхват в поясе 85-100 см	Обхват в поясе 100,5-115 см	
		Размер XL
		Обхват в поясе 115,5-130 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РС Размер М	Д x Ш x Г (10 см, 18,5 см, 2 см). Масса 0,086 кг
АМ-РС Размер L	Д x Ш x Г (10 см, 22 см, 2 см). Масса 0,096 кг
АМ-РС Размер Xl	Д x Ш x Г (10 см, 25,5 см, 2 см). Масса 0,104 кг

AM-PES-05

Общее описание

Женщины с диагнозом диастаз лобкового симфиза часто жалуются на ухудшение качества жизни во время беременности. Пояс на таз AM-PES-05 стабилизирует и разгружает крестцово-подвздошные суставы, очень хорошо стабилизирует лобковой симфиз, не допуская чрезмерного расхождения. Пояс AM-PES-05 благодаря уменьшению подвижности таза нивелирует боли и позволяют женщине спокойно перенести беременность. Ортез таза изготовлен из специального полиэстерового материала с увеличенной прочностью. В ортезе есть 2 бедренные пелоты из пластика, которые имеют мягкие подушки. Для подгонки изделия пелоты можно перемещать на ремне. У изделия есть алюминиевая пряжка, при помощи которой плавно регулируется обхват ортеза, а также застежка для точной регулировки обхвата. На одной из бедренных пелот есть система натяжения для регулировки компрессии.

Показания

- Диастаз лобкового симфиза
- Боли в тазе
- Нестабильность таза
- Боли подвздошно-крестцовых суставов
- Сильный набор массаа (смещение центра тяжести)
- Чрезмерное растяжение связок в области бедренного пояса

Технические характеристики

Размер – Универсальный

Обхват бедер в самом широком месте - мин 65 — макс 145 см



Габаритные размеры и масса

AM-PES-05 Размер универсальный

Д x Ш x Г (38 см, 11 см, 4 см). Масса 0,385 кг

АМ-РС-02

Общее описание

Тазовый ортез АМ-РС-02 предназначен для лечения послеродового разрыва лобкового симфиза, а также для артроза крестцовых суставов. Разрыв лобкового симфиза является следствием чрезмерного расслабления связок и повышения подвижности костей таза под воздействием гормонов беременности (эстрогенов). Ортез АМ-РС-02 — это ортез, стабилизирующий массив таз и крестцово-подвздошный сустав. Интеллектуальная комбинация эластичного и неэластичного материала обеспечивает индивидуальную стабилизацию.



Показания

- разрыв лобкового симфиза
- дегенеративные поражения крестцово-подвздошных суставов (артроз)
- нестабильность крестцово-подвздошных суставов

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL
Окружность бедер в самом широком месте	Окружность бедер в самом широком месте	Окружность бедер в самом широком месте	Окружность бедер в самом широком месте	Окружность бедер в самом широком месте
86-94 см	94,5-102 см	102,5-110 см	110,5-118 см	118,5-126 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РС-02 Размер S	Д x Ш x Г (15,5 см, 20 см, 4 см). Масса 0,215 кг
АМ-РС-02 Размер M	Д x Ш x Г (16 см, 21,5 см, 4 см). Масса 0,232 кг
АМ-РС-02 Размер L	Д x Ш x Г (17 см, 23 см, 4 см). Масса 0,249 кг
АМ-РС-02 Размер XL	Д x Ш x Г (17,5 см, 24,5 см, 4 см). Масса 0,266 кг
АМ-РС-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (18,5 см, 26 см, 4 см). Масса 0,285 кг

АМ-РС-01

Общее описание

Бандаж имеет анатомическую форму, поэтому хорошо адаптируется к фигуре беременной женщины, поддерживает живот. Сзади в зависимости от размера есть 4 или 6 ортопедических вставок и 2 эластичные натяжные системы, дополнительно поддерживающие

живот. Вставки имеют строго ограниченную эластичность, достигаемую подбором пластмасс и соответствующим процессом изготовления. Застегивается в новый, асимметричный способ. Это позволяет лучше адаптировать пояс к фигуре. Пояс незаметный под одеждой. Он хорошо снимает нагрузку со спины, что уменьшает боли. Показания • беременность, как в первые месяцы, так и в последние, • ослабление связок суставов брюшной полости и таза, • неправильная осанка (смещенный вперед центр тяжести), • гиперлордоз. Технические характеристики			
Размер М	Размер L	Размер XL	
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	
85-100 см	100,5-115 см	115,5-130 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-РС-01 Размер М	Д х Ш х Г (30 см, 42,5 см, 5 см). Масса 0,327 кг
АМ-РС-01 Размер L	Д х Ш х Г (30 см, 50 см, 5 см). Масса 0,358 кг
АМ-РС-01 Размер XL	Д х Ш х Г (30 см, 58 см, 5 см). Масса 0,391 кг

ОТ-10	
Общее описание Бандаж имеет анатомическую форму, поэтому хорошо адаптируется к фигуре беременной женщины, поддерживает живот. Сзади в зависимости от размера есть 4 или 6 ортопедических вставок и 2 эластичные натяжные системы, дополнительно поддерживающие живот. Вставки имеют строго ограниченную эластичность, достигаемую подбором пластмасс и соответствующим процессом изготовления. Застегивается в новый, асимметричный способ. Это позволяет лучше адаптировать пояс к фигуре. Пояс незаметный под одеждой. Он хорошо снимает нагрузку со спины, что уменьшает боли. Показания	

• беременность, как в первые месяцы, так и в последние, • ослабление связок суставов брюшной полости и таза, • неправильная осанка (смещенный вперед центр тяжести), • гиперлордоз. • Слишком изогнутый позвоночник, • Растянуты мышцы живота,		
Технические характеристики		
Размер М	Размер L	Размер XL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
85-100 см	100,5-115 см	115,5-130 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-10 Размер М	Д x Ш x Г (33 см, 36 см, 3 см). Масса 0,427 кг
ОТ-10 Размер L	Д x Ш x Г (33 см, 42 см, 3 см). Масса 0,474 кг
ОТ-10 Размер XL	Д x Ш x Г (33 см, 48 см, 3 см). Масса 0,521 кг

АМ-ОРВW						
Общее описание Бандаж стабилизирует поясничный отдел позвоночника, благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичной компрессии уменьшает боли в пояснично-крестцовом отделе, согревает. Изготовлен из материала, хорошо адаптирующегося к телу пациента.						
Показания • после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины • при острых и хронических болях позвоночника в пояснице по причине травм, перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) или дегенеративных изменений, • профилактически для спортсменов, начинающих интенсивные тренировки (особенно в начале) или для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота.						
Технические характеристики						
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL	
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97,5-110 см	110,5-125 см	125.5-145 см	

Габаритные размеры и масса

АМ-ОРВW Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 28 см, 2 см). Масса 0,149 кг
АМ-ОРВW Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 29 см, 2 см). Масса 0,152 кг
АМ-ОРВW Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 30 см, 2 см). Масса 0,157 кг
АМ-ОРВW Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 31 см, 2 см). Масса 0,162 кг
АМ-ОРВW Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 32 см, 2 см). Масса 0,168 кг
АМ-ОРВW Размер XXXL	Д x Ш x Г (30 см, 33 см, 2 см). Масса 0,174 кг

АМ-ОРВN					
Общее описание Орtez стабилизирует поясничный отдел позвоночника благодаря усилению мышц живота. Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичной компрессии уменьшает боли, согревает. Изготовлен из материала, хорошо адаптирующегося к телу пациента. В основном состоит из экологического чесанного хлопка, поэтому есть только серовато-бежевого цвета. Показания • после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины • при острых и хронических болях позвоночника в пояснице по причине травм, перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) или дегенеративных изменений, • профилактически для спортсменов, начинающих интенсивные тренировки (особенно в начале) или для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота. Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ОРВN Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 32 см, 3 см). Масса 0,095кг
АМ-ОРВN Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 33 см, 3 см). Масса 0,102 кг

АМ-ОРВН Размер L	Д х Ш х Г (22 см, 34 см, 3 см). Масса 0,108 кг
АМ-ОРВН Размер XL	Д х Ш х Г (22 см, 35 см, 3 см). Масса 0,113 кг
АМ-ОРВН Размер XXL	Д х Ш х Г (22 см, 36 см, 3 см). Масса 0,118 кг
АМ-ОРВН Размер XXXL	Д х Ш х Г (22 см, 37 см, 3 см). Масса 0,123 кг

АМ-ZPBW				
Общее описание Бандаж усиливает мышцы брюшной стенки, благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичной компрессии уменьшает боли в пояснично-крестцовом отделе, согревает. Изготовлен материала, хорошо адаптирующегося к телу пациента. В основном состоит из экологического чесанного хлопка, поэтому есть только серовато-бежевого цвета. Отверстия между переплетениями позволяют коже дышать, что увеличивает комфорт и улучшает отвод пота. Показания • после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины • при острых и хронических болях позвоночника в пояснице, • профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота, • уменьшение риска грыж в месте шрамов после операций. Технические характеристики				
Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ZPBW Размер S	Д х Ш х Г (30 см, 31 см, 3 см). Масса 0,176 кг
АМ-ZPBW Размер M	Д х Ш х Г (30 см, 33 см, 3 см). Масса 0,183 кг
АМ-ZPBW Размер L	Д х Ш х Г (30 см, 35 см, 3 см). Масса 0,19 кг
АМ-ZPBW Размер XL	Д х Ш х Г (30 см, 37 см, 3 см). Масса 0,197 кг
АМ-ZPBW Размер XXL	Д х Ш х Г (30 см, 39 см, 3 см). Масса 0,203 кг

АМ-ZPBN				
Общее описание Бандаж усиливает мышцы брюшной стенки, благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичной компрессии уменьшает боли в пояснично-крестцовом отделе, согревает. Изготовлен из материала, хорошо адаптирующегося к телу пациента. В основном состоит из экологического чесанного хлопка, поэтому есть только серовато-бежевого цвета. Отверстия между переплетениями позволяют коже дышать, что увеличивает комфорт и улучшает отвод пота. Кроме того, переплетения нитей при большей компрессии делают легкий микромассаж. Показания • после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины • при острых и хронических болях позвоночника в пояснице, • профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота, • уменьшение риска грыж в месте шрамов после операций. Технические характеристики				
Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ZPBN Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 32 см, 3 см). Масса 0,124 кг
АМ-ZPBN Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 34 см, 3 см). Масса 0,129 кг
АМ-ZPBN Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 36 см, 3 см). Масса 0,134 кг
АМ-ZPBN Размер XL	Д x Ш x Г (22 см, 38 см, 3 см). Масса 0,140 кг
АМ-ZPBN Размер XXL	Д x Ш x Г (22 см, 40 см, 3 см). Масса 0,148 кг

АМ-АРВW

Общее описание

Бандаж стабилизирует поясничный отдел позвоночника благодаря усилению мышц живота, а эластичная компрессия уменьшает боли. Изготовлен из материала хорошо адаптирующегося к телу пациента. Конструкция с отверстиями между нитями пропускает воздух позволяя коже «дышать» и отводит пот. Кроме того, переплетения нитей при большей компрессии создают эффект микромассажа. Материал приятный для кожи пациента.



Показания

- после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины
- при хронических болях позвоночника в пояснице,
- профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота,
- уменьшение риска грыж в месте шрамов после операций,
- при острых и хронических болях позвоночника по причине травм, перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) или дегенеративных изменений,
- профилактически для спортсменов, начинающих интенсивные тренировки (особенно в начале) или для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

АМ-АРВW Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 26 см, 2 см). Масса 0,139 кг
АМ-АРВW Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 28 см, 2 см). Масса 0,148 кг
АМ-АРВW Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 30 см, 2 см). Масса 0,156 кг
АМ-АРВW Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 32 см, 2 см). Масса 0,164 кг
АМ-АРВW Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 34 см, 2 см). Масса 0,172 кг
АМ-АРВW Размер XXXL	Д x Ш x Г (30 см, 36 см, 2 см). Масса 0,181 кг

АМ-АРВН

Общее описание

Бандаж стабилизирует поясничный отдел позвоночника благодаря усилению мышц живота, а эластичная компрессия уменьшает боли. Изготовлен из материала хорошо адаптирующегося к телу пациента. Конструкция с отверстиями между нитями пропускает воздух позволяя коже «дышать» и отводит пот. Кроме того, переплетения нитей при большей компрессии создают эффект микромассажа. Материал приятный для кожи пациента.



Показания

- после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины
- при хронических болях позвоночника в пояснице,
- профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота,
- уменьшение риска грыж в месте шрамов после операций,
- при острых и хронических болях позвоночника по причине травм, перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) или дегенеративных изменений,
- профилактически для спортсменов, начинающих интенсивные тренировки (особенно в начале) или для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

АМ-АРВН Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 26 см, 2 см). Масса 0,129 кг
АМ-АРВН Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 28 см, 2 см). Масса 0,137 кг
АМ-АРВН Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 30 см, 2 см). Масса 0,146 кг
АМ-АРВН Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 32 см, 2 см). Масса 0,155 кг
АМ-АРВН Размер XXL	Д x Ш x Г (26 см, 34 см, 2 см). Масса 0,164 кг
АМ-АРВН Размер XXXL	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 2 см). Масса 0,173 кг

АМ-PLBW		
Общее описание Бандаж АМ-PLBW рекомендуется в случаях, когда не требуется сильная стабилизация поясницы, а нужна поддержка мышц живота. Этот бандаж в большей степени выполняет функцию поддержки чем стабилизации. Уменьшает болевые синдромы в поясничном отделе, поддерживает и разгружает брюшную стенку, дает пациенту больше свободы движений. Бандаж имеет высоту 30 см и благодаря применению специальной ортопедической резины точно прилегает к телу, адаптируется к любой фигуре. Показания • острые болевые синдромы в пояснично-крестцовом отделе, • дегенеративные заболевания позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • дископатия в поясничной области, • после операций на пояснично-крестцовом отделе, • после снятия иммобилизации пояснично-крестцового отдела, • деформации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, • перегрузки пояснично-крестцового отдела, • после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины, • профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота. Технические характеристики		
Размер S	Размер М	Размер L
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см



Габаритные размеры и масса

АМ-PLBW Размер S	Д x Ш x Г (70 см, 27 см, 0,5 см). Вес 0,220 кг
АМ-PLBW Размер М	Д x Ш x Г (72 см, 28 см, 0,5 см). Вес 0,223 кг
АМ-PLBW Размер L	Д x Ш x Г (75 см, 29 см, 0,5 см). Вес 0,225 кг

АМ-PLBN

Общее описание

Бандаж АМ-PLBN рекомендуется в случаях, когда не требуется сильная стабилизация поясницы, а нужна поддержка мышц живота. Этот бандаж в большей степени выполняет функцию поддержки чем стабилизации. Уменьшает болевые синдромы в поясничном отделе, поддерживает и разгружает брюшную стенку, дает пациенту больше свободы движений.

Бандаж имеет высоту 22 см и благодаря применению специальной ортопедической резины точно прилегает к телу, адаптируется к любой фигуре. Изготовлен из материала хорошо адаптирующегося к телу пациента.



Показания

- острые болевые синдромы в пояснично-крестцовом отделе,
- дегенеративные заболевания позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- дископатия в поясничной области,
- после операций на пояснично-крестцовом отделе,
- после снятия иммобилизации пояснично-крестцового отдела,
- деформации позвоночника в пояснично-крестцовом отделе,
- перегрузки пояснично-крестцового отдела,
- после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины,
- профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота.

Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе	Обхват в поясе
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PLBN Размер S	Д x Ш x Г (24 см, 30 см, 2 см). Масса 0,131 кг
АМ-PLBN Размер M	Д x Ш x Г (24 см, 30 см, 2 см). Масса 0,136 кг
АМ-PLBN Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 30 см, 2 см). Масса 0,140 кг
АМ-PLBN Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 30 см, 2 см). Масса 0,148 кг

АМ-PLBN Размер XXL	Д x Ш x Г (28 см, 30 см, 2 см). Масса 0,156 кг
АМ-PLBN Размер XXXL	Д x Ш x Г (28 см, 30 см, 2 см). Масса 0,163 кг

ОТ-14					
Общее описание Стомный пояс ОТ-14 обеспечивает постоянную компрессию брюшной полости. Предотвращает чрезмерное растяжение брюшных слоев и поддерживает правильное сжатие брюшной стенки. Пояс ОТ-14 обеспечивает гибкость, не препятствует дыханию, но в то же время обладает исключительной прочностью на растяжение и надежно сжимает брюшную полость. Поэтому пояс не теряет анатомичной формы после многократного использования и обеспечивает эффективную компрессию даже при длительном пользовании изделием. Показания • колостомы • илеостомы • уростомы. Технические характеристики					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-14 Размер S	Д x Ш x Г (22 см, 37 см, 2 см). Масса 0,110 кг
ОТ-14 Размер M	Д x Ш x Г (22 см, 37 см, 2 см). Масса 0,116 кг
ОТ-14 Размер L	Д x Ш x Г (22 см, 37 см, 2 см). Масса 0,121 кг
ОТ-14 Размер XL	Д x Ш x Г (22 см, 37 см, 2 см). Масса 0,127 кг
ОТ-14 Размер XXL	Д x Ш x Г (22 см, 37 см, 2 см). Масса 0,134 кг
ОТ-14 Размер XXXL	Д x Ш x Г (22 см, 37 см, 2 см). Масса 0,141 кг

4ARMY-TX-05**Общее описание**

Бандаж усиливает мышцы брюшной стенки, благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичной компрессии уменьшает боли в пояснично-крестцовом отделе, согревает. Изготовлен из материала, хорошо адаптирующегося к телу пациента. В основном состоит из экологического чесанного хлопка, поэтому есть только серовато-бежевого цвета. Отверстия между переплетениями позволяют коже дышать, что увеличивает комфорт и улучшает отвод пота. Кроме того, переплетения нитей при большей компрессии делают легкий микромассаж.

**Показания**

- после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины
- при острых и хронических болях позвоночника в пояснице,
- профилактически для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота,
- уменьшение риска грыж в месте шрамов после операций.

Технические характеристик

Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см
--------------------------------------	--	--	--	--

Габаритные размеры и масса

4ARMY-TX-05 Размер S	Д x Ш x Г (23 см, 18 см, 5 см). Масса 0,278 кг
4ARMY-TX-05 Размер M	Д x Ш x Г (25 см, 18 см, 5 см). Масса 0,294 кг
4ARMY-TX-05 Размер L	Д x Ш x Г (27 см, 18 см, 5 см). Масса 0,301 кг
4ARMY-TX-05 Размер XL	Д x Ш x Г (27 см, 20 см, 5 см). Масса 0,318 кг
4ARMY-TX-05 Размер XXL	Д x Ш x Г (27 см, 22 см, 5 см). Масса 0,335 кг

4ARMY-TX-04

Общее описание

Бандаж рекомендуется в случаях, когда не требуется сильная стабилизация поясницы, а нужна поддержка мышц живота. Этот бандаж в большей степени выполняет функцию поддержки чем стабилизации. Уменьшает болевые синдромы в поясничном отделе, поддерживает и разгружает брюшную стенку, дает пациенту больше свободы движений.

Бандаж сделан с ортопедической резины благодаря чему точно прилегает к телу, адаптируется к любой фигуре.

Показания

- после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины
- при острых и хронических болях позвоночника в пояснице по причине травм, перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) или дегенеративных изменений,
- профилактически для спортсменов, начинающих интенсивные тренировки (особенно в начале) или для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-TX-04 Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 37 см, 2 см). Масса 0,377 кг
4ARMY-TX-04 Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 39 см, 2 см). Масса 0,392 кг
4ARMY-TX-04 Размер L	Д x Ш x Г (31 см, 41 см, 2 см). Масса 0,405 кг
4ARMY-TX-04 Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 43 см, 2 см). Масса 0,421 кг
4ARMY-TX-04 Размер XXL	Д x Ш x Г (31 см, 45 см, 2 см). Масса 0,438 кг
4ARMY-TX-04 Размер XXXL	Д x Ш x Г (31 см, 47 см, 2 см). Масса 0,456 кг

4ARMY-TX-02

Общее описание

Ортез 4ARMY-TX-02 полужесткий, изготовлен из легкой хлопчатой ортопедической резины, позволяющей коже свободно дышать. Укрепляет мышцы брюшной стенки, а благодаря использованию анатомически очерченных ортопедических косточек он стабилизирует и разгружает позвоночник в пояснично-крестцовом отделе.

Показания

- после операций поясничного отдела позвоночника
- после снятия гипсовой иммобилизации пояснично-крестцового отдела, в качестве стабилизатора,
- после травм или перегрузок (слишком интенсивные тренировки или тяжелый физический труд) мышц живота и спины
- профилактически для спортсменов, начинающих интенсивные тренировки (особенно в начале) или для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу со слабыми мышцами живота.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75-85 см	85-97 см	97-110 см	110-125 см	125-145 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-TX-02 Размер S	Д x Ш x Г (31 см, 37 см, 2 см). Масса 0,375 кг
4ARMY-TX-02 Размер M	Д x Ш x Г (31 см, 39 см, 2 см). Масса 0,391 кг
4ARMY-TX-02 Размер L	Д x Ш x Г (31 см, 41 см, 2 см). Масса 0,405 кг
4ARMY-TX-02 Размер XL	Д x Ш x Г (31 см, 43 см, 2 см). Масса 0,421 кг
4ARMY-TX-02 Размер XXL	Д x Ш x Г (31 см, 45 см, 2 см). Масса 0,438 кг
4ARMY-TX-02 Размер XXXL	Д x Ш x Г (31 см, 47 см, 2 см). Масса 0,456 кг

AM-SO-09

Общее описание

Бандаж усиливает мышцы брюшной стенки, благодаря поддержанию стабильной температуры и эластичной компрессии уменьшает боли в крестцовом отделе, согревает. Изготовлен из высококачественного, «дышащего» материала, хорошо адаптирующегося к телу пациента. Основной тканью для такой продукции является хлопок, а эластичность достигается при помощи добавления лайкры. Сетчатая ткань вентилирует кожу, а отсутствие швов увеличивает комфорт. Бесшовная структура и мягкость дышащей хлопковой ткани позволяет носить бандаж даже после кесарева сечения.



Показания

- помогает вернуть прежнюю фигуру, плоский живот
- поддерживает спину, укрепляет мышцы
- подходит после кесарева сечения
- уменьшает растяжки, укрепляет кожу
- поддерживает осанку в положении стоя и сидя, в особенности во время кормления грудью

Технические характеристики

Размер S Обхват талии 65-75 см	Размер M Обхват талии 75,5-85 см	Размер L Обхват талии 85,5-97 см	Размер XL Обхват талии 97,5-110 см	Размер XXL Обхват талии 110,5-125 см
--------------------------------------	--	--	--	--

Габаритные размеры и масса

AM-SO-09 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 29 см, 4 см). Масса 0,128 кг
AM-SO-09 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 31 см, 4 см). Масса 0,135 кг
AM-SO-09 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 33 см, 4 см). Масса 0,143 кг
AM-SO-09 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 4 см). Масса 0,151 кг
AM-SO-09 Размер XXL	Д x Ш x Г (26 см, 39 см, 4 см). Масса 0,160 кг

ОТ-12					
Общее описание Пояс ОТ-12, как и кожа человека, поддерживает оптимальную температуру, что благоприятно сказывается на снижении болевых ощущений. Кроме того, пояс обеспечивает постоянное сжатие брюшной полости. Одетый утром, лежа, он не позволяет грыже выделяться и увеличиваться в течение дня. Предотвращает чрезмерное растяжение брюшных оболочек. Поддерживает правильное сжатие брюшной стенки. Пояс ОТ-12 обеспечивает гибкость, не затрудняет дыхание, но в то же время обладает исключительной устойчивостью к растяжению и отлично сжимает полость.					
Показания • Грыжа брюшной полости • Послеоперационно в области брюшной полости • Кесарево сечение • Усиленные физические нагрузки (подъемные)					
Технические характеристик					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-12 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 30 см, 2 см). Масса 0,109 кг
ОТ-12 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 32 см, 2 см). Масса 0,115 кг
ОТ-12 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 34 см, 2 см). Масса 0,121 кг
ОТ-12 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 2 см). Масса 0,127 кг
ОТ-12 Размер 2XL	Д x Ш x Г (26 см, 38 см, 2 см). Масса 0,134 кг
ОТ-12 Размер 3XL	Д x Ш x Г (26 см, 40 см, 2 см). Масса 0,141 кг

АМ-ТХ-02

Общее описание

Торакальный бандаж (фиксатор грудной клетки) АМ-ТХ-02 медицинское изделие для фиксации грудной клетки после хирургического вмешательства.

Послеоперационный период сопровождается не только болевым синдромом, но и страхом – швы могут разойтись от глубокого вдоха или неловкого поворота во время сна. Данное изделие отлично поддерживает грудину и может применяться на следующие сутки после операции. Универсальный размер и система адаптации изделия позволяют максимально точно подогнать изделие под индивидуальные параметры. Неэластичная структура текстиля и фиксирующие элементы (ремни и пряжки) служат для плотной фиксации и выполняют дополнительную поддерживающую функцию.

Показания

- После переломов ребер и грудины
- После кардиохирургических операций
- После хирургических операций на грудной клетке

Технические характеристики

Размер – Универсальный

Обхват грудной клетки - 70-130 см



Габаритные размеры и масса

АМ-ТХ-02 Размер универсальный	Д x Ш x Г (59 см, 42 см, 2 см). Масса 0,599 кг
-------------------------------	--

АМ-РТМ					
Общее описание Пояс Torako мужской АМ-РТМ, это хлопковый ортез туловища, стабилизирующий снаружи грудную клетку, уменьшающий болевые ощущения и облегчающий выполнение соответствующих дыхательных упражнений. Ортез изготовлен из хлопка, экологически чистой прочной и очень мягкой ортопедической резин.					
Показания • После переломов ребер и грудины • После кардиохирургических операций • После торакохирургических операций					
Технические характеристик					
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди	Обхват груди
76-86 см	85.5-95 см	95.5-105 см	10.5-115 см	115.5-125 см	125.5-135 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РТМ Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 38 см, 3 см). Масса 0,199 кг
АМ-РТМ Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 38.5 см, 3 см). Масса 0,208 кг
АМ-РТМ Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 39 см, 3 см). Масса 0,215 кг
АМ-РТМ Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 39.5 см, 3 см). Масса 0,222 кг
АМ-РТМ Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 40 см, 3 см). Масса 0,229 кг
АМ-РТМ Размер XXXL	Д x Ш x Г (30 см, 40.5 см, 3 см). Масса 0,237 кг

АМ-РТД					
Общее описание Стабилизирует внешне грудную клетку. Уменьшает боли и облегчает выполнение дыхательных упражнений. В основном состоит из экологического чесанного хлопка, поэтому есть только серовато-бежевого цвета. Отверстия между переплетениями позволяют коже дышать, что увеличивает комфорт и улучшает отвод пота. Кроме того, переплетения нитей при большей компрессии делают легкий микромассаж.					
Показания • После переломов ребер и грудины • После кардиологических операций • После торакохирургических операций Технические характеристики					
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
70-80 см	80,5-90 см	90,5-100 см	100,5-110 см	110,5-120 см	120,5-130 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РТД Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 34 см, 2 см). Масса 0,187 кг
АМ-РТД Размер М	Д x Ш x Г (30 см, 35 см, 2 см). Масса 0,193 кг
АМ-РТД Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 36 см, 2 см). Масса 0,201 кг
АМ-РТД Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 37 см, 2 см). Масса 0,212 кг
АМ-РТД Размер XXL	Д x Ш x Г (30 см, 38 см, 2 см). Масса 0,224 кг
АМ-РТД Размер XXXL	Д x Ш x Г (30 см, 39 см, 2 см). Масса 0,231 кг

ОТ-16

Общее описание

Пояс Торако ОТ-16 предотвращает послеоперационные осложнения. Надежно стабилизирует послеоперационную рану, предотвращая ее расхождение. Обеспечивает легкий и быстрый доступ к месту хирургического разреза, облегчая очистку раны. Постоянная компрессия пояса производит незначительное сопротивление дыхательным мышцам во время вдоха и выдоха, повышая их выносливость и предотвращая дыхательную недостаточность. Пояс Торако также обеспечивает действенность упражнений по эффективному кашлю и стабилизирует послеоперационную рану при вертикализации пациента.

Показания

- после операции на сердце
- после операции на грудной клетке
- после переломов ребер и грудины.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
75-85 см	85,5-95 см	95,5-105 см	105,5-115 см	115,5-125 см	125,5-135 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-16 Размер S	Д x Ш x Г (30 см, 34 см, 3 см). Масса 0,161 кг
ОТ-16 Размер M	Д x Ш x Г (30 см, 36 см, 3 см). Масса 0,173 кг
ОТ-16 Размер L	Д x Ш x Г (30 см, 38 см, 3 см). Масса 0,186 кг
ОТ-16 Размер XL	Д x Ш x Г (30 см, 40 см, 3 см). Масса 0,198 кг
ОТ-16 Размер 2XL	Д x Ш x Г (30 см, 42 см, 3 см). Масса 0,111 кг
ОТ-16 Размер 3XL	Д x Ш x Г (30 см, 44 см, 3 см). Масса 0,124 кг

4ARMY-TX-03

Общее описание

Орtez 4ARMY-TX-03 стабилизирует грудную клетку снаружи. Уменьшает возникающие боли и облегчает выполнение необходимых дыхательных упражнений. Орtez изготовлен из хлопка, экологически чистой прочной и очень мягкой ортопедической резины. Отверстия между переплетениями позволяют коже дышать, что увеличивает комфорт и улучшает отвод пота.

Показания

- После переломов ребер и грудины
- После кардиохирургических операций
- После торакохирургических операций



Технические характеристики

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер XXL	Размер XXXL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
70-80 см	80,5-90 см	90,5-100 см	100,5-110 см	110,5-120 см	120,5-130 см

Габаритные размеры и масса

4ARMY-TX-03 Размер S	Д x Ш x Г (54 см, 38 см, 2 см). Масса 0,567 кг
4ARMY-TX-03 Размер M	Д x Ш x Г (54 см, 40 см, 2 см). Масса 0,578 кг
4ARMY-TX-03 Размер L	Д x Ш x Г (59 см, 42 см, 2 см). Масса 0,599 кг
4ARMY-TX-03 Размер XL	Д x Ш x Г (59 см, 44 см, 2 см). Масса 0,610 кг
4ARMY-TX-03 Размер XXL	Д x Ш x Г (59 см, 46 см, 2 см). Масса 0,619 кг
4ARMY-TX-03 Размер XXXL	Д x Ш x Г (59 см, 48 см, 2 см). Масса 0,628 кг

AM-SO-10

Общее описание

Грудной пояс изготовлен из эластичной резинки, растягивающейся вдоль и в поперек. Сетчатая конструкция с отверстиями между нитями пропускает воздух позволяя коже «дышать» и отводит пот. Кроме того, переплетения нитей при большей компрессии создают эффект микромассажа. Материал приятный для кожи пациента. Толщина ортеза максимально приближена к толщине кожи человека. Благодаря такому решению пояс гармонично взаимодействует с туловищем. Мягкость и эластичность используемого материала обеспечивает нежную, но эффективную компрессию.

Показания

- после операции на сердце
- после операции на грудной клетке
- после переломов ребер и грудины.

Технические характеристики



Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
75-85 см	85,5-95 см	95,5-105 см	105,5-115 см	115,5-125 см	125,5-135 см

Габаритные размеры и масса

AM-SO-10 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 29 см, 4 см). Масса 0,615 кг
AM-SO-10 Размер M	Д x Ш x Г (26 см, 30 см, 4 см). Масса 0,629 кг
AM-SO-10 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 33 см, 4 см). Масса 0,643 кг
AM-SO-10 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 4 см). Масса 0,657 кг
AM-SO-10 Размер 2XL	Д x Ш x Г (26 см, 40 см, 4 см). Масса 0,672 кг
AM-SO-10 Размер 3XL	Д x Ш x Г (26 см, 44 см, 4 см). Масса 0,685 кг

АМ-ТХ-01			
Общее описание Этот бандаж стабилизирует ребра при сжатии груди и помогает пациенту дышать, с ограниченной болью. Этот ортез хорошо фиксирует ребра через компрессию грудной клетки и ограничивает «распрямление» ребер уменьшая таким образом болевые ощущения при воспалении (во время глубоких вдохов). Ортез нагревает грудную клетку, что ускоряет процесс заживления. Широкая липучка делает ремень более жестким, что защищает переднюю реберную дугу. Эластичная резина и сетчатая конструкция позволяют коже дышать, обеспечивая необходимое сжатие. Резина тонкая, поэтому пояс невидим и удобен для пациента во время сидения. Пояс особенно рекомендуется при переломах ребер или грудины и воспалении плевры. Показания при переломах ребер или грудины и воспалении плевры. Технические характеристики			
Размер S Обхват груди 70-80 см	Размер M Обхват груди 80-90 см	Размер L Обхват груди 90-100 см	Размер XL Обхват груди 100-110 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ТХ-01 Размер S	Д x Ш x Г (10 см, 15 см, 2 см). Масса 0,400 кг
АМ-ТХ-01 Размер M	Д x Ш x Г (10 см, 17 см, 2 см). Масса 0,412 кг
АМ-ТХ-01 Размер L	Д x Ш x Г (10 см, 19 см, 2 см). Масса 0,424 кг
АМ-ТХ-01 Размер XL	Д x Ш x Г (10 см, 19 см, 2 см). Масса 0,437 кг

АМ-РЗМ	
Общее описание Мужской реберный пояс АМ-РЗМ эффективно стабилизирует ребра путем сжатия грудной клетки и эффективно ограничивает „расширение” ребер, уменьшая боль при воспалении (при более глубоких вдохах). Он позволяет поддерживать надлежащее тепло тела, что ускоряет заживление и снимает боль, а также обеспечивает отличную защиту места травмы. Пояс особенно рекомендуется при переломах ребер, грудины, а также при ушибах грудной клетки и плевритах. Широкая липучка укрепляет конструкцию, что дополнительно закрепляет передние арки ребер. Показания • при переломах ребер, • при переломах грудины, • при ушибах грудной клетки, • после кардиохирургических операций, • для стабилизации и укрепления мышц грудной клетки. Технические характеристики	
Размер М Обхват груди 70-90 см	Размер L Обхват груди 90-120 см

Габаритные размеры и масса

АМ-РЗМ Размер М	Д x Ш x Г (10 см, 20 см, 2 см). Масса 0,300 кг
АМ-РЗМ Размер L	Д x Ш x Г (10 см, 24 см, 2 см). Масса 0,341 кг

АМ-РЗД	
Общее описание Для облегчения использования пациентами изделия, мы использовали специальную широкую застежку. В задней части изделия установлена эластичная ортопедическая резина, благодаря которой пациент может свободно дышать, и, несмотря на увеличивающуюся во время дыхания окружность грудной клетки, изделие поддерживает надлежащее сжатие ребер. Сетчатая функция резины позволяет телу свободно дышать и из-за небольшой толщины не ощущается во время сидения пациента.	

Показания • при переломах ребер, • при переломах грудины, • при ушибах грудной клетки, • после кардиохирургических операций, • для стабилизации и укрепления мышц грудной клетки.	
Технические характеристик	
Размер М	Размер L
Обхват груди	Обхват груди
65-90 см	90-115 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PZD Размер М	Д x Ш x Г (10 см, 20 см, 2 см). Масса 0,300 кг
АМ-PZD Размер L	Д x Ш x Г (10 см, 23 см, 2 см). Масса 0,332 кг

АМ-PZM-02/М	
Общее описание АМ-PZM-02 / М-мужской ремень, предназначенный для стабилизации ребер. Обеспечивая сжатие грудной клетки, пояс стабилизирует ребра и эффективно ограничивает их "расширение", уменьшая боль в груди. Реберный пояс можно использовать в случаях воспаления грудной клетки (например, плевры), когда при глубоких вдохах возникает боль. Тогда использование пояса облегчает дискомфорт и облегчает дыхание. Кроме того, он особенно рекомендуется для лечения переломов ребер и грудины, для стабилизации и защиты поврежденных структур. Он также будет работать после ушибов грудной клетки. Широкая липучка укрепляет конструкцию, дополнительно закрепляя передние арки ребер.	
Показания • при переломах ребер, • при переломах грудины, • при ушибах грудной клетки, • после кардиохирургических операций,	

• для стабилизации и укрепления мышц грудной клетки.	
Технические характеристик	
Размер М	Размер L
Обхват груди	Обхват груди
70-90 см	90-120 см

Габаритные размеры и масса

АМ-PZM-02/М Размер М	Д x Ш x Г (15 см, 34 см, 2 см). Масса 0,333 кг
АМ-PZM-02/М Размер L	Д x Ш x Г (15 см, 35 см, 2 см). Масса 0,350 кг

АМ-TX-10	
Общее описание Женский реберный бандаж АМ-TX-10 эффективно стабилизирует ребра благодаря компрессии грудной клетки и ограничивает «распрямление» ребер, уменьшает боль при воспалениях (во время глубоких вдохов). Благодаря вентилируемой конструкции кожа остается сухой, что положительно сказывается на заживании и уменьшает боль. Особенно рекомендуется при переломах ребер, грудины, ушибах грудной клетки, плеврите. Широкая застежка на липучках придает жесткость, дополнительно защищает передние арки ребер. Показания • при переломах ребер, • при переломах грудины, • при ушибах грудной клетки, • после кардиохирургических операций, • для стабилизации и усиления мышц грудной клетки. Технические характеристики	
Размер М	Размер L
Обхват груди	Обхват груди
65-90 см	90-115 см

Габаритные размеры и масса

АМ-ТХ-10 Размер М	Д x Ш x Г (12 см, 24 см, 10 см). Масса 0,481 кг
АМ-ТХ-10 Размер L	Д x Ш x Г (12 см, 25 см, 10 см). Масса 0,495 кг

ОТ-11					
Общее описание Брюшной пояс ОТ-11 был разработан на основе характеристик кожи человека, которая обладает рядом свойств. Пояс следует надевать утром, в положении лежа, чтобы на протяжении дня предотвратить выпячивание грыжи и ее увеличение. Пояс не допускает излишнее растягивание брюшных оболочек. Поддерживает правильную компрессию стенки живота. Пояс ОТ-11 также отлично подходит в качестве послеоперационного оборудования после хирургического вмешательства в области брюшной полости, включая кесарево сечение. Послеоперационный рубец может способствовать возникновению грыжи, поэтому так важна его компрессия. Показания • Брюшная грыжа • После операции в области живота • Кесарево сечение • Большая физическая нагрузка (подъем тяжести). Технические характеристики					
Размер S	Размер М	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-11 Размер S	Д x Ш x Г (26 см, 31 см, 2 см). Масса 0,064 кг
ОТ-11 Размер М	Д x Ш x Г (26 см, 32 см, 2 см). Масса 0,072 кг
ОТ-11 Размер L	Д x Ш x Г (26 см, 33 см, 2 см). Масса 0,081 кг
ОТ-11 Размер XL	Д x Ш x Г (26 см, 34 см, 2 см). Масса 0,086 кг
ОТ-11 Размер 2XL	Д x Ш x Г (26 см, 35 см, 2 см). Масса 0,094 кг
ОТ-11 Размер 3XL	Д x Ш x Г (26 см, 36 см, 2 см). Масса 0,103 кг

ОТ-15					
Общее описание Этот реберный бандаж, как и кожа человека, поддерживает оптимальную температуру тела, что положительно влияет на уменьшение болей. Кроме того, ортез обеспечивает постоянную компрессию и увеличивает проприоцепцию суставов после травм или неврологических расстройств. Ортез обеспечивает гибкость, но в то же время обладает прочностью на растяжение. Благодаря этому он не теряет своей анатомической формы после многократного использования и обеспечивает эффективное сжатие даже в течение длительного времени использования.					
Показания • при переломах ребер, • при переломах грудины, • при ушибах грудной клетки, • после кардиохирургических операций, • для стабилизации и усиления мышц грудной клетки.					
Технические характеристик					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки	Обхват грудной клетки
75-85 см	85,5-95 см	95,5-105 см	105,5-115 см	115,5-125 см	125,5-135 см

Габаритные размеры и масса

ОТ-15 Размер S	Д x Ш x Г (15 см, 33 см, 2 см). Масса 0,082 кг
ОТ-15 Размер M	Д x Ш x Г (15 см, 34 см, 2 см). Масса 0,087 кг
ОТ-15 Размер L	Д x Ш x Г (15 см, 35 см, 2 см). Масса 0,093 кг
ОТ-15 Размер XL	Д x Ш x Г (15 см, 36 см, 2 см). Масса 0,099 кг
ОТ-15 Размер 2XL	Д x Ш x Г (15 см, 37 см, 2 см). Масса 0,104 кг
ОТ-15 Размер 3XL	Д x Ш x Г (15 см, 38 см, 2 см). Масса 0,109 кг

ENDURO-01					
Общее описание Ортез ENDURO-01 стабилизирует поясничный отдел позвоночника и защищает почки во время езды на мотоцикле. Пояс уменьшает боли, предотвращает их появление и улучшает двигательные возможности. Изделие имеет новую, более анатомическую форму, благодаря чему лучше прилегает к телу и лучше стабилизирует позвоночник. В задней части пояса есть 4 ортопедические вставки, которые прилегают к телу и стабилизируют позвоночник в поясничном отделе. Застежки изделия изготовлены в новый асимметричный способ. Это позволяет лучше подогнать пояс к телу. Для облегчения застегивания используется широкая застежка Показания Ортез ENDURO-01 стабилизирует поясничный отдел позвоночника и защищает почки во время езды на мотоцикле. Он кроме того согревает. Технические характеристики Общая высота изделия Спереди: 16 см Сзади: 25 см					
Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

ENDURO-01 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 38 см, 3 см). Масса 0,304 кг
ENDURO-01 Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 39 см, 3 см). Масса 0,321 кг
ENDURO-01 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 40 см, 3 см). Масса 0,337 кг
ENDURO-01 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 42 см, 3 см). Масса 0,349 кг
ENDURO-01 Размер 2XL	Д x Ш x Г (28 см, 44 см, 3 см). Масса 0,362 кг
ENDURO-01 Размер 3XL	Д x Ш x Г (28 см, 46 см, 3 см). Масса 0,384 кг

ENDURO-02

Общее описание

Ортез ENDURO-02 стабилизирует поясничный отдел позвоночника и защищает почки во время езды на мотоцикле. Пояс уменьшает боли, предотвращает их появление и улучшает двигательные возможности. В задней части пояса есть 4 ортопедические планшеты, которые прилегают к телу и стабилизируют поясничный отдел позвоночника. Застежки изделия изготовлены в новый асимметричный способ. Это позволяет лучше подогнать пояс к телу. Для облегчения застегивания используется широкая застежка. Сзади есть светоотражающий элемент, который улучшает видимость, выступая из-под куртки.



Показания

Стабилизирует поясничный отдел позвоночника и защищает почки во время езды на мотоцикле. Он кроме того согревает.

Технические характеристик

Общая высота изделия

Спереди: 16 см

Сзади: 28 см

Размер S	Размер M	Размер L	Размер XL	Размер 2XL	Размер 3XL
Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии	Обхват талии
65-75 см	75,5-85 см	85,5-97 см	97-110 см	110,5-125 см	125,5-145 см

Габаритные размеры и масса

ENDURO-02 Размер S	Д x Ш x Г (28 см, 19 см, 3 см). Вес 0,215 кг
ENDURO-02 Размер M	Д x Ш x Г (28 см, 21 см, 3 см). Вес 0,227 кг
ENDURO-02 Размер L	Д x Ш x Г (28 см, 23 см, 3 см). Вес 0,235 кг
ENDURO-02 Размер XL	Д x Ш x Г (28 см, 25 см, 3 см). Вес 0,247 кг
ENDURO-02 Размер 2XL	Д x Ш x Г (28 см, 27 см, 3 см). Вес 0,259 кг
ENDURO-02 Размер 3XL	Д x Ш x Г (28 см, 29 см, 3 см). Вес 0,271 кг

АМ-ОМ		
Общее описание Анатомическая форма ортеза обеспечивает высокий комфорт. Ортез идеально прилегает к телу, не сползает, незаметен под одеждой. Спереди есть пряжки, которые помогают достичь нужного натяжения и компрессии изделия. В задней части есть уплотненная подушка на поясницу, соединенная с системой обводящих ремней с двух сторон из велкро-ткани. Подушка отвечает за оптимальную компрессию пояснично-крестцовых суставов, ремни стабилизируют и позиционируют таз сзади. Практичные застежки на липучки и подвижная пряжка облегчают одевание и снятие ортеза. Показания • Артроз крестцово-подвздошных сочленений • Синдром пояснично-подвздошной мышцы • Нестабильность крестцово-подвздошных сочленений • Мышечные боли и тендопатии в области малого таза • После спондилоидоза поясничного отдела позвоночника • Блокировка / синдром крестцово-подвздошного сочленения (КПС) • Профилактически, в случае блокады крестцово-подвздошных сочленений. Технические характеристики		
Размер М Обхват бедер ч/з ягодицы 94-102 см	Размер L Обхват бедер ч/з ягодицы 102-110 см	Размер XL Обхват бедер ч/з ягодицы 110-118 см



Габаритные размеры и масса

АМ-ОМ Размер М	Д x Ш x Г (25 см, 27 см, 3см). Вес 0,115 кг
АМ-ОМ Размер L	Д x Ш x Г (25 см, 30 см, 3см). Вес 0,118кг
АМ-ОМ Размер XL	Д x Ш x Г (25 см, 33 см, 3см). Вес 0,120 кг

Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие или его основные части

Наименование изделия	Общее понятие	Материал	Марка	Страна, производитель
1. Ортез на шейный отдел позвоночника 4ARMY-KOL-01 2. Ортез на шейный отдел позвоночника 4ARMY-KOL-02 3. Ортопедический корсет OT-06 4. Ортопедический корсет OT-37 5. Ортопедический корсет OT-33 6. Ортопедический корсет OT-28 6. Ортопедический корсет OT-26 7. Ортопедический корсет OT-24 8. Ортопедический корсет OT-22 9. Ортопедический корсет OT-18 10. Реберный бандаж AM-PZM 11. Реберный бандаж AM-PZD	Трикотаж	Хлопок/полиэстер	Singiel Jersey	AML DZIANINY, Польша
1. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM 2. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM (детский) 3. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KS 4. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KS 5. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KS 6. Ортез на шейный отдел позвоночника 4ARMY-KOL-01 7. Ортез на шейный отдел позвоночника 4ARMY-KOL-02 8. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 9. Ортопедический корсет AM-WSK 10. Ортопедический корсет EB-LK-02 11. Ортопедический корсет AM-GJ-01 12. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 13. Ортопедический корсет STRADA 14. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TL SO 15. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TL SO 16. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TL SO 17. Ортопедический корсет AR-SO-03 18. Ортопедический корсет EB-LK 19. Ортопедический корсет EB-LK-01 20. Ортопедический корсет AR-WSP-01 21. Ортопедический корсет AR-WSP-02 22. Ортопедический корсет AR-WSP-03 23. Ортопедический корсет AM-SO-02 24. Ортопедический корсет AM-WSP-05 25. Ортопедический корсет AM-WSP-06 26. Ортопедический корсет AS-LK 27. Ортопедический корсет AS-LK-01 28. Ортопедический корсет AM-SO-07 29. Ортопедический корсет MS-T-02/TL SO PLUS 30. Ортопедический корсет MS-T-02/TL SO 31. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 32. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 33. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 (детский) 34. Бандаж грыжевой AM-PPB 35. Бандаж грыжевой AM-PPB (детский) 36. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 37. Ортез для таза AM-OM	Трикотаж	Полиэстер, полиуретан	C-460	SANWIL POLSKA Sp. Z. o. o. , Польша
1. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KOL-01 2. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 3. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 4. Ортопедический корсет EB-LK-02 5. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 6. Ортопедический корсет AM-PES-06 7. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 8. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TL SO 9. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TL SO 10. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TL SO 11. Ортопедический корсет EB-LK 12. Ортопедический корсет EB-LK-01 13. Ортопедический корсет AS-LK-02 14. Ортопедический корсет AR-WSP-01 15. Ортопедический корсет AR-WSP-02 16. Ортопедический корсет AR-WSP-03 17. Ортопедический корсет AM-SO-02 18. Ортопедический корсет AM-SO-04 19. Ортопедический корсет AM-WSP-02 20. Ортопедический корсет AM-WSP-05 21. Ортопедический корсет AS-LK-01 22. Ортопедический корсет AM-SO-07 23. Ортопедический корсет MS-T-02/TL SO PLUS 24. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS 25. Ортопедический корсет MS-T-02/TL SO 26. Ортопедический корсет AM-WSP-09 27. Ортопедический корсет AM-WSP-10 28. Ортопедический корсет MS-T-01/TL SO PLUS 29. Ортопедический корсет MS-T-01/TL SO 30. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 31. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 32. Ортопедический реклинатор AM-TX-04 33. Ортопедический реклинатор AM-TX-05	Пластиковые пряжки, концовки, фиксаторы	Полнаמיד	40- 10-17IPA6	ITW ESPANA, S.A. Испания

34. Ортопедический реклинатор OT-20 35. Пояс для беременных AM-PES-05 36. Пояс для беременных AM-PC-02 37. Ортопедический корсет OT-06 38. Ортопедический корсет OT-37 38. Ортопедический корсет OT-33 39. Ортопедический корсет OT-28 40. Ортопедический корсет OT-26 41. Ортопедический корсет OT-24 42. Ортопедический корсет OT-22 43. Ортопедический корсет OT-18 44. Реберный бандаж AM-PZM 45. Реберный бандаж AM-PZD				
1. Ортопедический корсет AM-GJ-01 2. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 3. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 4. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TLSO 5. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TLSO 6. Ортопедический корсет AR-SO-01 7. Ортопедический корсет AR-SO-01/BEŽ 8. Ортопедический корсет AR-SO-03 9. Ортопедический корсет AS-LK-02 10. Ортопедический корсет AR-WSP-01 11. Ортопедический корсет AR-WSP-02 12. Ортопедический корсет AR-WSP-03 13. Ортопедический корсет AM-SO-01 14. Ортопедический корсет AM-SO-04 15. Ортопедический корсет AM-SO-05 16. Ортопедический корсет AM-WSP-02 17. Ортопедический корсет AM-WSP-03 18. Ортопедический корсет AM-WSP-04 19. Ортопедический корсет AM-WSP-05 20. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 21. Ортопедический корсет AM-WSP-08 22. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 23. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 24. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 25. Ортопедический реклинатор AM-TX-05 26. Ортопедический реклинатор OT-20 27. Ортопедический реклинатор AM-PES-08 28. Пояс для беременных AM-PES-05	SANMED, полиуретаново е трикотажное полотно с покрытием из полиуретана	Полиуретан	1014/01487/A	SANWIL POLSKA Sp. Z. o. o. , Польша
1. Ортопедический корсет EB-LK-02 2. Ортопедический корсет STRADA 3. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TLSO 4. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TLSO 5. Ортопедический корсет AR-SO-03 6. Ортопедический корсет EB-LK 7. Ортопедический корсет EB-LK-01 8. Ортопедический корсет AM-SO-01 9. Ортопедический корсет AM-SO-04 10. Ортопедический корсет AM-SO-05 11. Ортопедический корсет AM-WSP-03 12. Ортопедический корсет AM-WSP-04 13. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 14. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 15. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TLSO 16. Ортопедический корсет OT-01 17. Ортопедический корсет OT-03 18. Ортопедический корсет OT-04 19. Ортопедический корсет OT-05 20. Ортопедический корсет AM-SO-03 21. Ортопедический корсет AM-SO-08 22. Ортопедический корсет AM-WSP-08 23. Ортопедический реклинатор AM-TX-05	Трикотаж	хлопок, вискоза, бамбук	19-0303 TPX Jet	Weder & Heusser GmbH & Co RG, Польша
1. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KM 2. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KS 3. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 4. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 5. Ортопедический корсет AM-WSK 6. Ортопедический корсет AM-GJ-01 7. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 8. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TLSO 9. Ортопедический корсет AS-LK-02 10. Ортопедический корсет AR-WSP-01 11. Ортопедический корсет AR-WSP-03 12. Ортопедический корсет AM-SO-04 13. Ортопедический корсет AM-SO-06 14. Ортопедический корсет AM-WSP-01 (детский) 15. Ортопедический корсет AM-WSP-04 16. Ортопедический корсет AM-WSP-05 17. Ортопедический корсет AM-WSP-06 18. Ортопедический корсет AS-LK 19. Ортопедический корсет AM-SO-07 20. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSO PLUS 21. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS 22. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSO 23. Ортопедический корсет AM-WSP-09 24. Ортопедический корсет AM-WSP-10	Трикотаж	Хлопок	Pirate	AMARO Sp. Jawna, Польша

25. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO PLUS 26. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO 27. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 28. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 29. Ортопедический реклинатор AM-PES-03 30. Ортопедический реклинатор AM-PES-03 (детский) 31. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 32. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 (детский) 33. Ортопедический реклинатор AM-TX-05 34. Ортопедический реклинатор OT-21 35. Ортопедический реклинатор OT-20 36. Ортопедический реклинатор AM-PES-08 37. Бандаж грыжевой AM-PP 38. Брюшной бандаж AM-OPBW 39. Брюшной бандаж AM-OPBN 40. Брюшной бандаж AM-ZPBW 41. Брюшной бандаж AM-ZPBN 42. Брюшной бандаж AM-PLBW 43. Брюшной бандаж AM-PLBN 44. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-05 45. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-04 46. Брюшной бандаж AM-SO-09 47. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 48. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTM 49. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTD 50. Бандаж грудной (торакальный) 4ARMY-TX-03 51. Бандаж согревающий ENDURO-01 52. Бандаж согревающий ENDURO-02 53. Ортез для лица AM-OM				
1. Бандаж согревающий ENDURO-01 2. Бандаж согревающий ENDURO-02	Пряжи	акрил-шерсть	WLO-PR-ELLE4#10	PPH LEGS Sp. z o.o. Польша
1. Ортопедический корсет STRADA 2. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TLSO 3. Ортопедический корсет OT-01 4. Ортопедический корсет OT-03 5. Ортопедический корсет OT-04 6. Ортопедический корсет OT-05 7. Ортопедический корсет AR-SO-03 8. Ортопедический корсет AM-SO-01 9. Ортопедический корсет AM-SO-03 10. Ортопедический корсет AM-SO-04 11. Ортопедический корсет AM-SO-05 12. Ортопедический корсет AM-WSP-03 13. Ортопедический корсет AM-WSP-04 14. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 15. Ортопедический корсет AM-SO-08 16. Ортопедический корсет AM-WSP-08 17. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 18. Ортопедический реклинатор AM-TX-05	Трикотаж	Хлопок, вискоза, полиэстер	MODALNA	BOWI-STYL, Польша
1. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM 2. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM (детский) 3. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KS 4. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO 5. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 6. Ортопедический корсет AM-PES-06 7. Ортопедический корсет OT-02 8. Ортопедический корсет AR-SO-01 9. Ортопедический корсет AR-SO-01/BEZ 10. Ортопедический корсет U-LK 11. Ортопедический корсет AM-PES-01 12. Ортопедический корсет AM-WSP-01 13. Ортопедический корсет AM-WSP-02 14. Ортопедический корсет AS-LK-01 15. Ортопедический корсет AM-SO-08 16. Ортопедический корсет FIX-T-02 17. Ортопедический корсет OT-13 18. Ортопедический корсет OT-09 19. Ортопедический корсет AM-GJ-02 20. Ортопедический корсет AM-DPB (детский) 21. Ортопедический корсет AM-DPZ (детский) 22. Ортопедический корсет OT-38 23. Ортопедический корсет TB-01 24. Ортопедический реклинатор AM-TX-04 25. Ортопедический реклинатор AM-PCS 26. Ортопедический реклинатор AM-PES-09 27. Брюшной бандаж OT-14 28. Брюшной бандаж OT-12 29. Бандаж грудной (торакальный) OT-16 30. Реберный бандаж OT-11 31. Реберный бандаж OT-15 32. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KOL-01 33. Ортопедический корсет AM-WSK 34. Ортопедический корсет AM-GJ-01 35. Ортопедический корсет AM-SO-04 36. Ортопедический корсет AM-WSP-04 37. Ортопедический корсет AM-WSP-06 38. Ортопедический корсет OT-33	Трикотажные ткани из синтетических нитей	полиэстер, полиамид	Tencel	WAMATEX P.P.H.U. Польша

39. Ортопедический корсет OT-24 40. Бандаж грыжевой AM-1PP 41. Бандаж грыжевой AM-2PP				
1. Ортопедический корсет EB-LK-03 2. Ортопедический корсет AM-PES-06 3. Ортопедический корсет EB-LK-01/TL SO 4. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TL SO 5. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TL SO 6. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TL SO 7. Ортопедический корсет OT-05 8. Ортопедический корсет AS-LK-02 9. Ортопедический корсет AR-WSP-01 10. Ортопедический корсет AR-WSP-02 11. Ортопедический корсет AR-WSP-02/B 12. Ортопедический корсет AR-WSP-03 13. Ортопедический корсет AM-SO-02 14. Ортопедический корсет AM-SO-03 15. Ортопедический корсет AM-WSP-04 16. Ортопедический корсет AM-WSP-05 17. Ортопедический корсет AM-WSP-07 18. Ортопедический корсет AS-LK-01 19. Ортопедический корсет AM-SO-07 20. Ортопедический корсет AM-WSP-09 21. Ортопедический корсет AM-WSP-10 22. Ортопедический корсет OT-30 23. Ортопедический корсет OT-26 24. Ортопедический корсет OT-22 25. Ортопедический корсет OT-18 26. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 27. Ортопедический корсет OT-08 28. Ортопедический реклинатор OT-19 29. Пояс для беременных AM-PES-05 30. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-04 31. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 32. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 33. Ортопедический корсет STRADA 34. Ортопедический корсет OT-04 35. Ортопедический корсет OT-06 36. Ортопедический корсет EB-LK 37. Ортопедический корсет EB-LK-01 38. Ортопедический корсет AM-WSP-03 39. Ортопедический корсет AM-SO-08 40. Ортопедический корсет AM-WSP-08 41. Ортопедический реклинатор AM-TX-04 42. Ортопедический реклинатор AM-TX-05 43. Брюшной бандаж OT-14 44. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 45. Ортопедический корсет AM-SO-06 46. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS 47. Ортопедический корсет MS-T-01/TL SO PLUS 48. Ортопедический корсет MS-T-01/TL SO 49. Ортопедический корсет OT-33 50. Ортопедический корсет OT-24 51. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 52. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTM 53. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTD	Трикотаж	Полиэстер	Dz. Łezka N4 130g 75D	P.P.H.U. KOLREX, Польша
1. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM 2. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM (детский) 3. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KS 4. Ортопедический корсет AM-TX-03 5. Ортопедический корсет EB-LK-03 6. Ортопедический корсет AM-PES-06 7. Ортопедический корсет EB-LK-01/TL SO 8. Ортопедический корсет OT-03 9. Ортопедический корсет OT-04 10. Ортопедический корсет OT-05 11. Ортопедический корсет OT-06 12. Ортопедический корсет AR-SO-01 13. Ортопедический корсет AR-SO-01/BEŻ 14. Ортопедический корсет AR-SO-03 15. Ортопедический корсет AR-WSP-02/B 16. Ортопедический корсет AM-PES-01 17. Ортопедический корсет AM-PES-01 (детский) 18. Ортопедический корсет AM-SO-06 19. Ортопедический корсет AM-WSP-01 20. Ортопедический корсет AM-WSP-02 21. Ортопедический корсет AM-WSP-03 22. Ортопедический корсет AM-WSP-07 23. Ортопедический корсет AM-SO-08 24. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS 25. Ортопедический корсет AM-WSP-08 26. Ортопедический корсет AM-WSP-09 27. Ортопедический корсет AM-WSP-10 28. Ортопедический корсет MS-T-01/TL SO PLUS 29. Ортопедический корсет MS-T-01/TL SO 30. Ортопедический корсет OT-13 31. Ортопедический корсет OT-37 32. Ортопедический корсет OT-36 33. Ортопедический корсет OT-35 34. Ортопедический корсет OT-34	Трикотажные ткани	полиамид, полиэстер, эластан	ROMA	GEISA FABRICS, S.L., Барселона, Испания

35. Ортопедический корсет ОТ-33 36. Ортопедический корсет ОТ-32 37. Ортопедический корсет ОТ-31 38. Ортопедический корсет ОТ-30 39. Ортопедический корсет ОТ-29 40. Ортопедический корсет ОТ-28 41. Ортопедический корсет ОТ-27 42. Ортопедический корсет ОТ-26 43. Ортопедический корсет ОТ-25 44. Ортопедический корсет ОТ-24 45. Ортопедический корсет ОТ-23 46. Ортопедический корсет ОТ-22 47. Ортопедический корсет ОТ-18 48. Ортопедический корсет ОТ-09 49. Ортопедический корсет ОТ-08 50. Ортопедический корсет AM-GJ-02 51. Ортопедический корсет AM-DPB (детский) 52. Ортопедический корсет AM-DPZ (детский) 53. Ортопедический корсет PCO-T-01 54. Ортопедический корсет PCO-T-02 55. Ортопедический корсет PCO-T-03 56. Ортопедический корсет PCO-T-04 57. Ортопедический корсет PCO-T-09 58. Ортопедический корсет PCO-T-10 59. Ортопедический корсет PCO-T-11 60. Ортопедический корсет PCO-T-16 61. Ортопедический корсет PCO-T-17 62. Ортопедический корсет PCO-T-18 63. Ортопедический корсет PCO-T-23 64. Ортопедический корсет PCO-T-24 65. Ортопедический корсет PCO-T-25 66. Ортопедический реклинатор ОТ-19 67. Брюшной бандаж AM-APBW 68. Брюшной бандаж AM-APBN 69. Брюшной бандаж ОТ-14 70. Брюшной бандаж ОТ-12 71. Бандаж грудной (торакальный) ОТ-16 72. Бандаж грудной (торакальный) AM-SO-10 73. Реберный бандаж AM-TX-01 74. Реберный бандаж AM-PZM-02/M 75. Реберный бандаж AM-TX-10 76. Реберный бандаж ОТ-11 77. Реберный бандаж ОТ-15 78. Ортопедический корсет EB-LK-02 79. Ортопедический корсет ОТ-07 80. Ортопедический корсет AR-SO-02 81. Ортопедический корсет EB-LK 82. Ортопедический корсет EB-LK-01 83. Ортопедический корсет FIX-T-01 84. Пояс для беременных AM-PC 85. Пояс для беременных AM-PC-02 86. Бандаж грудной (торакальный) 4ARMY-TX-03				
1. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM 2. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KM (детский) 3. Ортез на шейный отдел позвоночника EB-KS 4. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KM 5. Ортез на шейный отдел позвоночника AM-KS 6. Ортез на шейный отдел позвоночника 4ARMY-KOL-01 7. Ортез на шейный отдел позвоночника 4ARMY-KOL-02 8. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 9. Ортопедический корсет AM-TX-03 10. Ортопедический корсет EB-LK-03 11. Ортопедический корсет AM-WSK 12. Ортопедический корсет AM-PES-06 13. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 14. Ортопедический корсет EB-LK-01/TLSO 15. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TLSO 16. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TLSO 17. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TLSO 18. Ортопедический корсет ОТ-01 19. Ортопедический корсет ОТ-02 20. Ортопедический корсет ОТ-03 21. Ортопедический корсет ОТ-04 22. Ортопедический корсет ОТ-05 23. Ортопедический корсет ОТ-06 24. Ортопедический корсет ОТ-07 25. Ортопедический корсет AR-SO-01 26. Ортопедический корсет AR-SO-01 (детский) 27. Ортопедический корсет AR-SO-01/BE2 28. Ортопедический корсет AR-SO-02 29. Ортопедический корсет AR-SO-03 30. Ортопедический корсет U-LK 31. Ортопедический корсет AR-WSP-02 32. Ортопедический корсет AR-WSP-03 33. Ортопедический корсет AM-SO-04 34. Ортопедический корсет AM-SO-05 35. Ортопедический корсет AM-WSP-06 36. Ортопедический корсет AM-SO-08 37. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS	Липучки велкро	Полиамид	VL 440	GEISA FABRICS, S.L., Барселона, Испания

38. Ортопедический корсет AM-WSP-09 39. Ортопедический корсет AM-WSP-10 40. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO PLUS 41. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO 42. Ортопедический корсет FIX-T-01 43. Ортопедический корсет OT-13 44. Ортопедический корсет OT-35 45. Ортопедический корсет OT-34 46. Ортопедический корсет OT-33 47. Ортопедический корсет OT-32 48. Ортопедический корсет OT-31 49. Ортопедический корсет OT-30 50. Ортопедический корсет OT-29 51. Ортопедический корсет OT-25 52. Ортопедический корсет OT-24 53. Ортопедический корсет OT-09 54. Ортопедический корсет AM-GJ-02 55. Ортопедический корсет AM-DPB (детский) 56. Ортопедический корсет AM-DPZ (детский) 57. Ортопедический корсет OT-38 58. Ортопедический корсет TB-01 59. Ортопедический корсет PCO-T-01 60. Ортопедический корсет PCO-T-02 61. Ортопедический корсет PCO-T-03 62. Ортопедический корсет PCO-T-04 63. Ортопедический реклинатор OT-19 64. Бандаж грыжевой AM-1PP 65. Бандаж грыжевой AM-2PP 66. Бандаж грыжевой AM-PPB (детский) 67. Пояс для беременных AM-PC-01 68. Пояс для беременных OT-10 69. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-02 70. Реберный бандаж AM-TX-01 71. Реберный бандаж AM-PZM 72. Реберный бандаж AM-PZD 73. Бандаж согревающий ENDURO-01 74. Бандаж согревающий ENDURO-02				
1. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 2. Ортопедический корсет EB-LK 3. Ортопедический корсет EB-LK-01 4. Ортопедический корсет AS-LK-02 5. Ортопедический корсет AR-WSP-01 6. Ортопедический корсет AR-WSP-02 7. Ортопедический корсет AR-WSP-02/B 8. Ортопедический корсет AR-WSP-03 9. Ортопедический корсет AM-PES-01 10. Ортопедический корсет AM-PES-01 (детский) 11. Ортопедический корсет AM-SO-06 12. Ортопедический корсет AM-WSP-01 13. Ортопедический корсет AM-WSP-01 (детский) 14. Ортопедический корсет AM-WSP-02 15. Ортопедический корсет AM-WSP-03 16. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 17. Ортопедический корсет AM-WSP-07 18. Ортопедический корсет AM-WSP-08 19. Ортопедический корсет FIX-T-02 20. Ортопедический корсет OT-37 21. Ортопедический корсет OT-36 22. Ортопедический корсет OT-28 23. Ортопедический корсет OT-27 24. Ортопедический корсет OT-23 25. Ортопедический корсет OT-22 26. Ортопедический корсет OT-18 27. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 28. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 29. Ортопедический реклинатор AM-PES-03 30. Ортопедический реклинатор AM-PES-03 (детский) 31. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 (детский) 32. Ортопедический реклинатор AM-TX-04 33. Ортопедический реклинатор OT-21 34. Ортопедический реклинатор OT-20 35. Пояс для беременных AM-PC-02 36. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTM 37. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTD 38. Бандаж грудной (торакальный) OT-16 39. Бандаж грудной (торакальный) 4ARMY-TX-03 40. Бандаж грудной (торакальный) AM-SO-10 41. Ортез для таза AM-OM	Ремни велкро	Полиамид	367227206-15	SGS Taiwan, Тайвань
1. Ортопедический корсет AM-PES-06 2. Ортопедический корсет AM-WSP-01 3. Ортопедический корсет AM-WSP-02 4. Ортопедический корсет AM-WSP-03 5. Ортопедический корсет AM-WSP-08 6. Ортопедический корсет OT-13 7. Ортопедический корсет OT-28 8. Ортопедический корсет OT-22 9. Ортопедический корсет AM-GJ-02 10. Ортопедический корсет AM-DPB (детский) 11. Ортопедический корсет AM-DPZ (детский) 12. Ортопедический корсет PCO-T-01	Синтетическая пряжа(нити)	Полиамид, дорластан	S545L	gedeon, Польша

13. Ортопедический корсет PCO-T-02 14. Ортопедический корсет PCO-T-03 15. Ортопедический корсет PCO-T-04 16. Ортопедический корсет PCO-T-09 17. Ортопедический корсет PCO-T-10 18. Ортопедический корсет PCO-T-11 19. Ортопедический корсет PCO-T-16 20. Ортопедический корсет PCO-T-17 21. Ортопедический корсет PCO-T-18 22. Ортопедический корсет PCO-T-23 23. Ортопедический корсет PCO-T-24 24. Ортопедический корсет PCO-T-25 25. Брюшной бандаж OT-14 26. Бандаж грудной (торакальный) OT-16 27. Реберный бандаж OT-11 28. Реберный бандаж OT-15				
1. Ортопедический корсет EB-LK-02 2. Ортопедический корсет AM-PES-06 3. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 4. Ортопедический корсет STRADA 5. Ортопедический корсет OT-02 6. Ортопедический корсет U-LK 7. Ортопедический корсет AM-SO-08 8. Ортопедический корсет AM-WSP-09 9. Ортопедический корсет AM-WSP-10 10. Ортопедический корсет FIX-T-01 11. Ортопедический корсет FIX-T-02 12. Ортопедический корсет AM-GJ-02 13. Ортопедический корсет AM-DPB (детский) 14. Ортопедический корсет AM-DPZ (детский) 15. Ортопедический корсет TB-01 16. Ортопедический корсет PCO-T-01 17. Ортопедический корсет PCO-T-02 18. Ортопедический корсет PCO-T-03 19. Ортопедический корсет PCO-T-04 20. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 21. Ортопедический реклинатор AM-TX-04 22. Ортопедический реклинатор OT-20 23. Ортопедический реклинатор AM-PES-08 24. Ортопедический реклинатор AM-PCS 25. Ортопедический реклинатор AM-PES-09 26. Реберный бандаж AM-PZM 27. Реберный бандаж AM-PZD 28. Бандаж согревающий ENDURO-01 29. Бандаж согревающий ENDURO-02	Неопреновая ткань	Неопрен	CP17-069338 - SZ	SGS, Китай
1. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 2. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 3. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TLSo 4. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TLSo 5. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TLSo 6. Ортопедический корсет EB-LK 7. Ортопедический корсет EB-LK-01 8. Ортопедический корсет U-LK 9. Ортопедический корсет AR-WSP-01 10. Ортопедический корсет AR-WSP-02 11. Ортопедический корсет AM-SO-02 12. Ортопедический корсет AM-WSP-03 13. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 14. Ортопедический корсет AS-LK-01 15. Ортопедический корсет AM-SO-08 16. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSo PLUS 17. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSo 18. Ортопедический корсет AM-WSP-08 19. Ортопедический корсет FIX-T-01 20. Ортопедический корсет FIX-T-02 21. Ортопедический корсет OT-33 22. Ортопедический корсет OT-32 23. Ортопедический корсет OT-24 24. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 25. Ортопедический корсет AM-GJ-02 26. Ортопедический корсет AM-DPB (детский) 27. Ортопедический корсет OT-38 28. Ортопедический корсет TB-01 29. Ортопедический корсет PCO-T-03 30. Ортопедический корсет PCO-T-04 31. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 32. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 (детский) 33. Ортопедический реклинатор OT-20 34. Ортопедический реклинатор AM-PCS 35. Ортопедический реклинатор AM-PES-09 36. Бандаж грыжевой AM-1PP 37. Бандаж грыжевой AM-2PP 38. Бандаж грыжевой AM-PPB 39. Бандаж грыжевой AM-PPB (детский) 40. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 41. Реберный бандаж AM-PZM 42. Реберный бандаж AM-PZD 43. Бандаж согревающий ENDURO-01 44. Бандаж согревающий ENDURO-02 45. Ортез для таза AM-OM	Ворсованная ткань	Велюр	B10-2	Halco Europe LTD, Великобритан ия

1. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 2. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 3. Ортопедический корсет EB-LK-02 4. Ортопедический корсет STRADA 5. Ортопедический корсет AM-SO-01 6. Ортопедический корсет AM-SO-02 7. Ортопедический корсет AM-SO-03 8. Ортопедический корсет AM-SO-04 9. Ортопедический корсет AM-WSP-04 10. Ортопедический корсет MS-T-02/TLISO PLUS 11. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS 12. Ортопедический корсет MS-T-02/TLISO 13. Ортопедический корсет AM-WSP-09 14. Ортопедический корсет AM-WSP-10 15. Ортопедический корсет MS-T-01/TLISO PLUS 16. Ортопедический корсет MS-T-01/TLISO 17. Ортопедический реклинатор AM-PES-08 18. Ортопедический реклинатор AM-PCS 19. Ортопедический реклинатор AM-PES-09 20. Бандаж грыжевой AM-1PP 21. Бандаж грыжевой AM-2PP 22. Бандаж грыжевой AM-PPB 23. Пояс для беременных AM-PC 24. Брюшной бандаж AM-OPBW 25. Брюшной бандаж AM-OPBN 26. Брюшной бандаж AM-APBW 27. Брюшной бандаж AM-APBN 28. Брюшной бандаж AM-PLBW 29. Брюшной бандаж AM-PLBN 30. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-04 31. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-02 32. Брюшной бандаж OT-12 33. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 34. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTM 35. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTD 36. Бандаж грудной (торакальный) OT-16 37. Бандаж грудной (торакальный) 4ARMY-TX-03 38. Бандаж грудной (торакальный) AM-SO-10 39. Реберный бандаж AM-PZM-02/M 40. Реберный бандаж AM-TX-10 41. Реберный бандаж OT-15 42. Ортопедический корсет AM-WSP-05 43. Ортопедический корсет AS-LK-01 44. Ортопедический корсет FIX-T-02 45. Ортопедический реклинатор AM-TX-05	Тканная лента	Полиамид	25038-54-4	Halco Europe LTD, Великобритан ия
1. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 2. Ортопедический корсет AM-WSK 3. Ортопедический корсет EB-LK-02 4. Ортопедический корсет AM-PES-06 5. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 6. Ортопедический корсет STRADA 7. Ортопедический корсет OT-01 8. Ортопедический корсет OT-02 9. Ортопедический корсет OT-03 10. Ортопедический корсет OT-04 11. Ортопедический корсет OT-05 12. Ортопедический корсет OT-07 13. Ортопедический корсет AR-SO-01 14. Ортопедический корсет AR-SO-01 (детский) 15. Ортопедический корсет AR-SO-01/BEZ 16. Ортопедический корсет AR-SO-02 17. Ортопедический корсет AR-SO-03 18. Ортопедический корсет AR-WSP-01 19. Ортопедический корсет AR-WSP-03 20. Ортопедический корсет AM-SO-01 21. Ортопедический корсет AM-SO-04 22. Ортопедический корсет AM-SO-05 23. Ортопедический корсет AM-SO-06 24. Ортопедический корсет AM-WSP-01 25. Ортопедический корсет AM-WSP-05 26. Ортопедический корсет AM-WSP-06 27. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 28. Ортопедический корсет AM-WSP-07 29. Ортопедический корсет AS-LK 30. Ортопедический корсет AM-WSP-09 31. Ортопедический корсет AM-WSP-10 32. Ортопедический корсет FIX-T-02 33. Ортопедический корсет OT-37 34. Ортопедический корсет OT-34 35. Ортопедический корсет OT-31 36. Ортопедический корсет OT-26 37. Ортопедический корсет OT-25 38. Ортопедический корсет OT-23 39. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 40. Ортопедический корсет OT-09 41. Ортопедический корсет OT-08 42. Ортопедический корсет PCO-T-01 43. Ортопедический корсет PCO-T-02 44. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 45. Ортопедический реклинатор AM-PES-08	Ворсованная ткань	Полиамид	Welur 165g/m2	PA ZAKŁAD PRODUKCJI DZIEWIARS KIEJ WALDEMAR ROSIŃSKI, Польша

46. Пояс для беременных AM-PC-02 47. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 48. Реберный бандаж AM-TX-01				
1. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 2. Ортопедический корсет AM-WSK 3. Ортопедический корсет EB-LK-02 4. Ортопедический корсет AM-GJ-01 5. Ортопедический корсет AM-PES-06 6. Ортопедический корсет STRADA 7. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TLSO 8. Ортопедический корсет AM-WSP-04/TLSO 9. Ортопедический корсет AM-WSP-07/TLSO 10. Ортопедический корсет OT-04 11. Ортопедический корсет OT-05 12. Ортопедический корсет OT-07 13. Ортопедический корсет AR-SO-01 14. Ортопедический корсет AR-SO-01/BEZ 15. Ортопедический корсет AR-SO-02 16. Ортопедический корсет AR-SO-03 17. Ортопедический корсет EB-LK 18. Ортопедический корсет EB-LK-01 19. Ортопедический корсет AR-WSP-01 20. Ортопедический корсет AR-WSP-02 21. Ортопедический корсет AR-WSP-02/B 22. Ортопедический корсет AM-PES-01 (детский) 23. Ортопедический корсет AM-SO-01 24. Ортопедический корсет AM-SO-02 25. Ортопедический корсет AM-SO-03 26. Ортопедический корсет AM-SO-04 27. Ортопедический корсет AM-SO-06 28. Ортопедический корсет AM-WSP-01 29. Ортопедический корсет AM-WSP-02 30. Ортопедический корсет AM-WSP-03 31. Ортопедический корсет AM-WSP-06 32. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 33. Ортопедический корсет AM-WSP-07 34. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSO PLUS 35. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSO 36. Ортопедический корсет AM-WSP-08 37. Ортопедический корсет AM-WSP-09 38. Ортопедический корсет AM-WSP-10 39. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO PLUS 40. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO 41. Ортопедический корсет FIX-T-02 42. Ортопедический корсет OT-37 43. Ортопедический корсет OT-29 44. Ортопедический корсет OT-28 45. Ортопедический корсет OT-26 46. Ортопедический корсет OT-22 47. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 48. Ортопедический корсет TB-01 49. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 50. Ортопедический реклинатор AM-TX-04 51. Ортопедический реклинатор OT-20 52. Ортопедический реклинатор OT-19 53. Ортопедический реклинатор AM-PES-08 54. Ортопедический реклинатор AM-PCS 55. Ортопедический реклинатор AM-PES-09 56. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 57. Бандаж грудной (торакальный) OT-16 58. Пояс для таза AM-OM	Шины вставки	Алюминиевы й сплав	424005.21	Josef Pauer - METAL TRADE, Чехия
1. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 2. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 3. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 4. Ортопедический корсет EB-LK-01/TLSO 5. Ортопедический корсет OT-04 6. Ортопедический корсет U-LK 7. Ортопедический корсет AR-WSP-01 8. Ортопедический корсет AR-WSP-02 9. Ортопедический корсет AM-SO-03 10. Ортопедический корсет AM-WSP-06 11. Ортопедический корсет AS-LK 12. Ортопедический корсет OT-13 13. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 14. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 (детский) 15. Пояс для беременных AM-PES-05	Шины вставки	Сталь (FE)	ST 34	RUR-DAN Marian Miształ, Польша
1. Ортопедический корсет AM-TX-03 2. Ортопедический корсет EB-LK-03 3. Ортопедический корсет AM-WSK 4. Ортопедический корсет AM-GJ-01 5. Ортопедический корсет AS-LK-02/CCA 6. Ортопедический корсет OT-01 7. Ортопедический корсет OT-03 8. Ортопедический корсет OT-05 9. Ортопедический корсет OT-06 10. Ортопедический корсет AR-SO-01 (детский)	Шины вставки	Пластик	DURACON M90	Polyplastics Co., Ltd., Япония

11. Ортопедический корсет AS-LK-02 12. Ортопедический корсет AR-WSP-02/B 13. Ортопедический корсет AM-PES-01 14. Ортопедический корсет AM-SO-04 15. Ортопедический корсет AM-SO-05 16. Ортопедический корсет AM-WSP-01 (детский) 17. Ортопедический корсет AM-WSP-04 18. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский) 19. Ортопедический корсет AS-LK 20. Ортопедический корсет AM-SO-08 21. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS 22. Ортопедический корсет AM-WSP-08 23. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO PLUS 24. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO 25. Ортопедический корсет OT-36 26. Ортопедический корсет OT-35 27. Ортопедический корсет OT-34 28. Ортопедический корсет OT-33 29. Ортопедический корсет OT-32 30. Ортопедический корсет OT-31 31. Ортопедический корсет OT-30 32. Ортопедический корсет OT-27 33. Ортопедический корсет OT-25 34. Ортопедический корсет OT-24 35. Ортопедический корсет OT-23 36. Ортопедический корсет OT-08 37. Ортопедический корсет AM-DPZ (детский) 38. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 (детский) 39. Ортопедический реклинатор AM-PES-08 40. Пояс для беременных AM-PES-05 41. Пояс для беременных AM-PC-01 42. Пояс для беременных OT-10 43. Брюшной бандаж OT-14 44. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-05 45. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-04 46. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-02 47. Бандаж грудной (торакальный) AM-TX-02 48. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTM 49. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTD 50. Бандаж грудной (торакальный) 4ARMY-TX-03 51. Бандаж грудной (торакальный) AM-SO-10 52. Реберный бандаж OT-15 53. Бандаж согревающий ENDURO-01 54. Бандаж согревающий ENDURO-02				
1. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 2. Ортопедический корсет MS-T-02/LSO 3. Ортопедический корсет AM-OK/CCA 4. Ортопедический корсет AR-WSP-01 5. Ортопедический корсет AR-WSP-03 6. Ортопедический корсет AM-SO-04 7. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSO PLUS 8. Ортопедический корсет MS-T-02/TLSO 9. Ортопедический корсет AM-WSP-09 10. Ортопедический корсет AM-WSP-10 11. Ортопедический корсет FIX-T-01 12. Ортопедический корсет 4ARMY-TX-01 13. Ортопедический корсет PCO-T-02 14. Ортопедический корсет PCO-T-03 15. Ортопедический корсет PCO-T-04 16. Ортопедический реклинатор AM-PES-04 17. Ортопедический реклинатор AM-PES-02 18. Ортопедический реклинатор OT-20 19. Бандаж грыжевой AM-1PP 20. Бандаж грыжевой AM-2PP 21. Ортез для таза AM-OM	Шины вставки	Пластик	ABS	ZiNTH Elektromaschi nenbau GmbH, Германия
1. Ортопедический корсет EB-LK-02 2. Ортопедический корсет OT-32 3. Ортопедический корсет OT-09 4. Бандаж грыжевой AM-PPB 5. Бандаж грыжевой AM-PPB (детский) 6. Пояс для беременных AM-PES-05	Силиконовые вставки, подуш ечки	Силикон	A14-16	Fresco, Испания
1. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO 2. Ортопедический корсет AM-TX-03 3. Ортопедический корсет EB-LK-03 4. Ортопедический корсет EB-LK-02 5. Ортопедический корсет AM-PES-06 6. Ортопедический корсет EB-LK-01/TLSO 7. Ортопедический корсет AM-WSP-03/TLSO 8. Ортопедический корсет OT-01 9. Ортопедический корсет OT-03 10. Ортопедический корсет OT-04 11. Ортопедический корсет OT-05 12. Ортопедический корсет OT-06 13. Ортопедический корсет OT-07 14. Ортопедический корсет AR-SO-01 15. Ортопедический корсет AR-SO-01 (детский) 16. Ортопедический корсет AR-SO-01/BEZ 17. Ортопедический корсет AR-SO-02 18. Ортопедический корсет AR-SO-03 19. Ортопедический корсет EB-LK 20. Ортопедический корсет EB-LK-01	Резина	Резина, каучук	RE41E	Rubberlite, Inc., США

21. Ортопедический корсет AR-WSP-02/B				
22. Ортопедический корсет AM-PES-01				
23. Ортопедический корсет AM-PES-01 (детский)				
24. Ортопедический корсет AM-SO-01				
25. Ортопедический корсет AM-SO-02				
26. Ортопедический корсет AM-SO-03				
27. Ортопедический корсет AM-SO-04				
28. Ортопедический корсет AM-SO-05				
29. Ортопедический корсет AM-SO-06				
30. Ортопедический корсет AM-WSP-01				
31. Ортопедический корсет AM-WSP-01 (детский)				
32. Ортопедический корсет AM-WSP-02				
33. Ортопедический корсет AM-WSP-04				
34. Ортопедический корсет AM-WSP-06				
35. Ортопедический корсет AM-WSP-06 (детский)				
36. Ортопедический корсет AS-LK				
37. Ортопедический корсет MS-T-01/LSO PLUS				
38. Ортопедический корсет AM-WSP-09				
39. Ортопедический корсет AM-WSP-10				
40. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO PLUS				
41. Ортопедический корсет MS-T-01/TLSO				
42. Ортопедический корсет OT-13				
43. Ортопедический корсет OT-37				
44. Ортопедический корсет OT-36				
45. Ортопедический корсет OT-35				
46. Ортопедический корсет OT-34				
47. Ортопедический корсет OT-33				
48. Ортопедический корсет OT-32				
49. Ортопедический корсет OT-31				
50. Ортопедический корсет OT-30				
51. Ортопедический корсет OT-29				
52. Ортопедический корсет OT-28				
53. Ортопедический корсет OT-27				
54. Ортопедический корсет OT-26				
55. Ортопедический корсет OT-25				
56. Ортопедический корсет OT-24				
57. Ортопедический корсет OT-23				
58. Ортопедический корсет OT-22				
59. Ортопедический корсет OT-18				
60. Ортопедический корсет OT-09				
61. Ортопедический корсет TB-01				
62. Ортопедический реклинатор AM-PES-03				
63. Ортопедический реклинатор AM-PES-03 (детский)				
64. Ортопедический реклинатор AM-TX-04				
65. Ортопедический реклинатор OT-21				
66. Ортопедический реклинатор OT-19				
67. Бандаж грыжевой AM-PP				
68. Бандаж грыжевой AM-1PP				
69. Бандаж грыжевой AM-2PP				
70. Пояс для беременных AM-PC				
71. Пояс для беременных AM-PES-05				
72. Пояс для беременных AM-PC-02				
73. Пояс для беременных AM-PC-01				
74. Пояс для беременных OT-10				
75. Брюшной бандаж AM-OPBW				
76. Брюшной бандаж AM-OPBN				
77. Брюшной бандаж AM-ZPBW				
78. Брюшной бандаж AM-ZPBN				
79. Брюшной бандаж AM-APBW				
80. Брюшной бандаж AM-APBN				
81. Брюшной бандаж AM-PLBW				
82. Брюшной бандаж AM-PLBN				
83. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-05				
84. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-04				
85. Брюшной бандаж 4ARMY-TX-02				
86. Брюшной бандаж AM-SO-09				
87. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTM				
88. Бандаж грудной (торакальный) AM-PTD				
89. Реберный бандаж AM-TX-01				

Комплект поставки медицинского изделия

Наименование	Количество
Изделия ортопедические «REN4MAT» для поддержки, коррекции или иммобилизации головы, шеи, туловища (одного варианта исполнения и типоразмера)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Меры предосторожности при применении

ВНИМАНИЕ !

Повторное использование изделия для других пациентов и недостаточная гигиеническая обработка

Раздражение кожи, возникновение экзем или инфекции вследствие заражения микроорганизмами

- Изделие разрешается использовать только для одного пациента.
- Регулярно чистите изделие.

Неправильное наложение или слишком тугое затягивание изделия

Раздражение кожи вследствие перегрева, локальное сдавливание в результате слишком плотного прилегания к телу

- Проверьте правильность прилегания и посадки изделия.
- Не используйте изделие в случае сомнений при возникновении раздражения кожи.

Контакт с высокими температурами, раскаленными предметами или огнем

Опасность травмирования (напр. ожоги) и опасность повреждения изделия

- Изделие хранить вдали от открытого огня, жара и других источников интенсивного теплового излучения.

ВНИМАНИЕ !

Контакт с жиром- и кислотосодержащими средствами, мазями и лосьонами

Недостаточная стабилизация вследствие потери свойств материала

- Не подвергайте изделие воздействию жиром- и кислотосодержащих средств, мазей и лосьонов

Ненадлежащее использование и изменения

Изменение или утрата функций, а также повреждение изделия

- Следует использовать изделие только по назначению и обращаться с ним аккуратно.
- Внесение изменений, изначально не предусмотренных конструкцией изделия, не допускается.

Использование изношенного или поврежденного изделия

Ограниченное действие

- Каждый раз перед использованием изделия необходимо выполнять его контроль на предмет надлежащей работы, наличия признаков износа и повреждений.
- Не используйте продукт в случае его неисправности, наличия признаков износа или при повреждении.

Способ применения

Продолжительность ежедневного ношения изделия, а также общий срок его использования Устанавливаются врачом.

- Первичная примерка и подгонка изделия должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Проинструктируйте пациента о правилах обращения с изделием и ухода за ним.
- Обратите внимание пациента на то, что он должен незамедлительно обратиться к врачу при появлении каких-либо необычных изменений (например, новых жалоб).


ЕВ-КМ



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

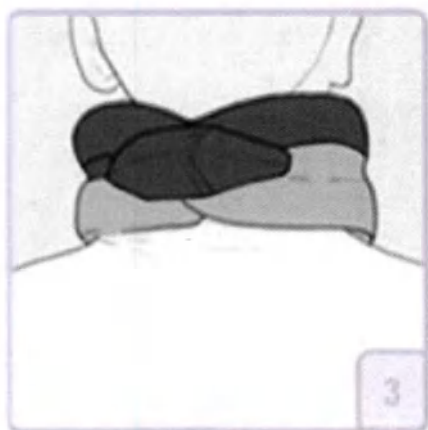

ЕВ-КМ (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



ЕВ-КС



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-KM



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-KS



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

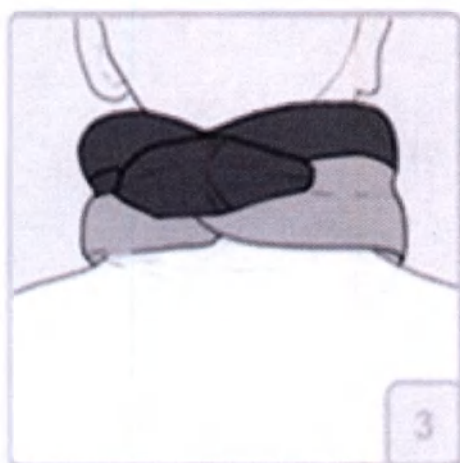

AM-KOL-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.


4ARMY-KOL-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

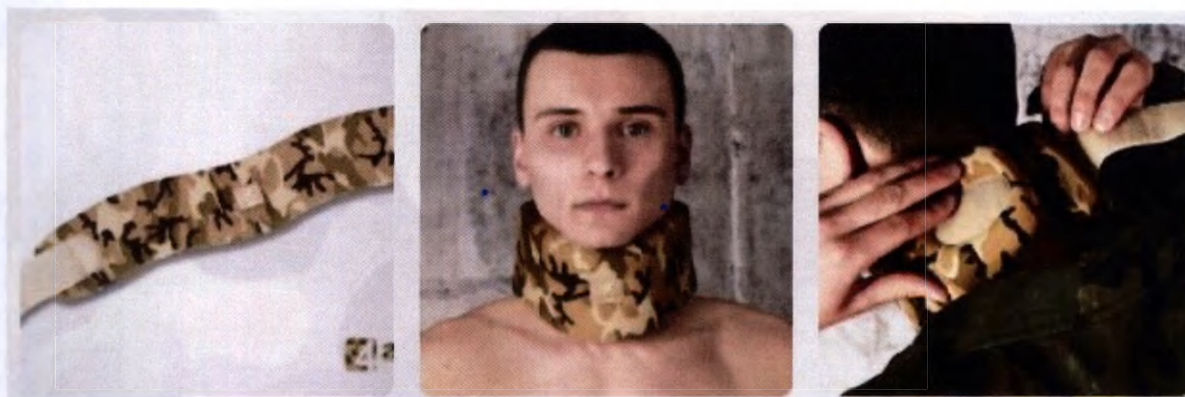


4ARMY-KOL-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

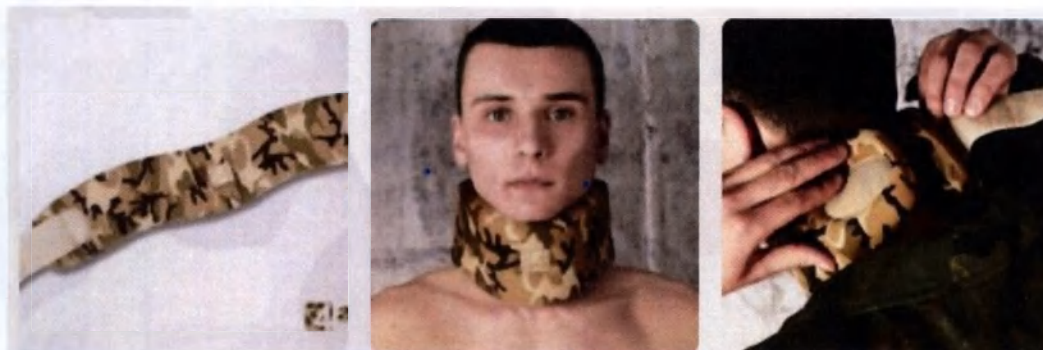


MS-T-01/LSO



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

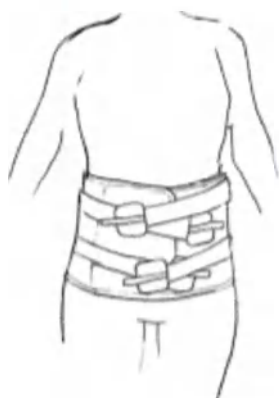

MS-T-02/LSO



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

AM-TX-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AR-WSP-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



ЕВ-LK-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-WSK



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.







Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

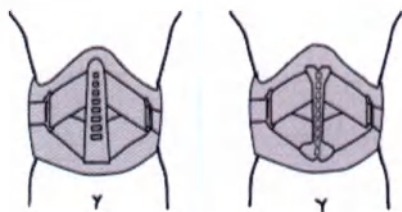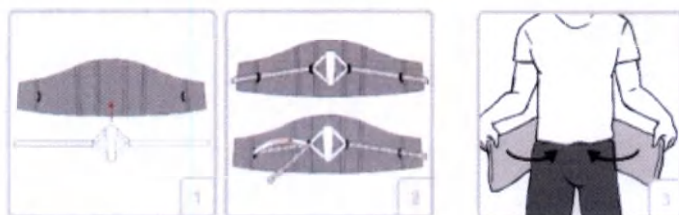

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

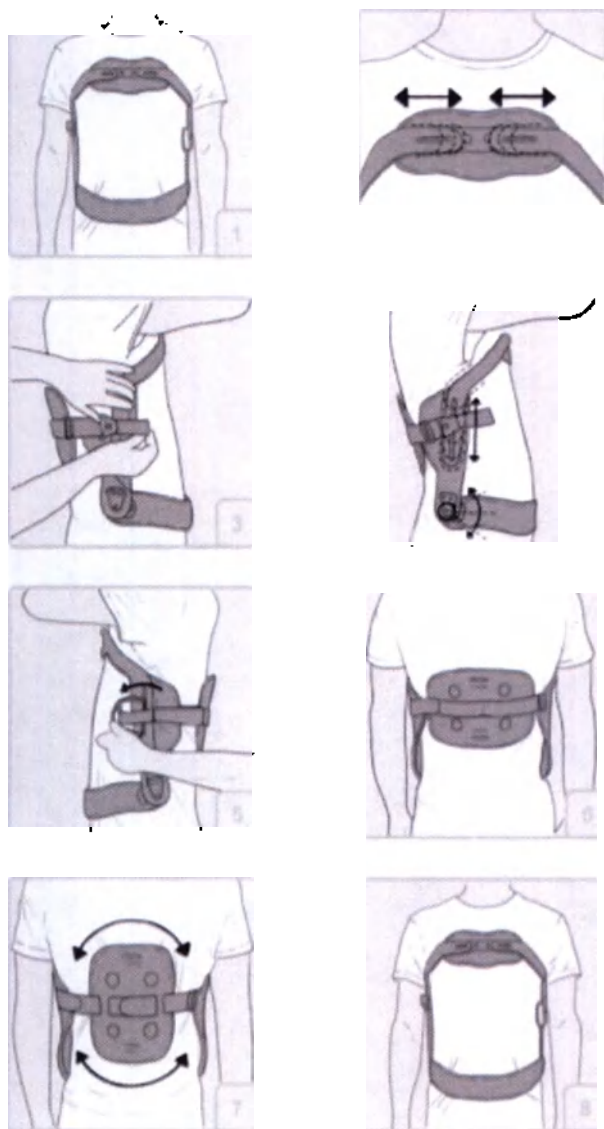

AM-OK/CCA



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Прикрепите ортез к спине и закрепите его спереди.
Установите правильное сжатие изделия




натяжение шнура с помощью пряжки на липучке.

Закрепите деталь на передней части изделия



При повторном использовании изделия обратите внимание на натяжной элемент он находился на месте (см. рисунок).

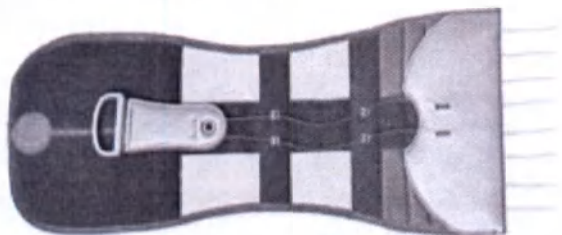

AM-PES-06



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Наденьте ортез на плечи.



Закрепите переднюю часть ортопедии на липучке.



Пристегните ремни



Установите соответствующее сжатие подтяжек и закрепите его на застежке спереди.



Готовое изделие.



AS-LK-02/CCA



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Прикрепите ортез к спине и закрепите его спереди.
Установите правильное сжатие изделия



натяжение шнура с помощью пряжки на липучке.
Закрепите деталь на передней части изделия



При повторном использовании изделия обратите внимание на натяжной элемент он находился на месте (см. рисунок).






Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

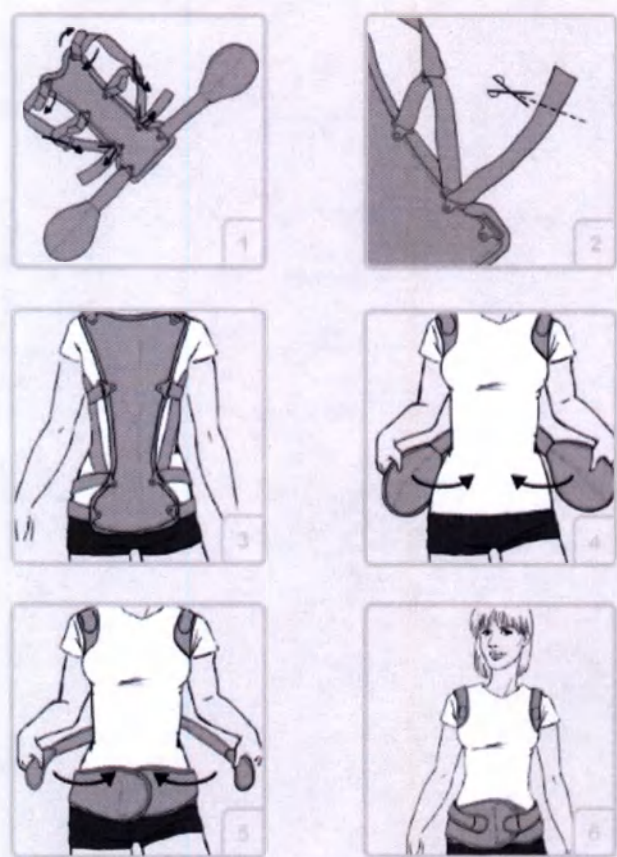


EB-LK-01/TLSO



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

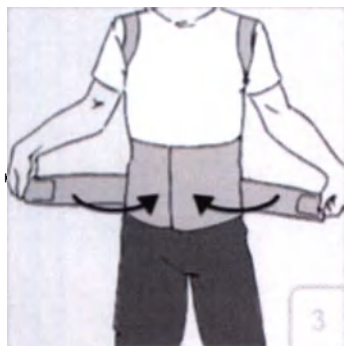

AM-WSP-03/TLSO



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Регулировка изделия не производится на пользователе.

Для регулировки используется отвертка, прилагаемая к изделию.



Отсоедините верхнюю pelоту чтобы с помощью отвёртки отрегулировать основание регулированию это зависит от ширины и высоты изделия. Есть два варианта настройки:



С помощью отвертки настрой высоту передних пелот



Отсоединить боковые части шнуровки и на основании измерения окружности отрезать лишний материал на талии и присоедините боковые части обратно



Если есть такая потребность - существует возможность сгибания верхнего зажима для всей стойки для адаптации изделия

AM-WSP-04/TL SO




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Регулировка изделия не производится на пользователе.


Для регулировки используется отвертка, прилагаемая к изделию.

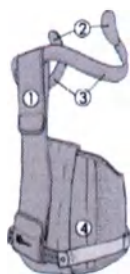

Отсоедините верхнюю пелоту чтобы с помощью отвёртки отрегулировать основание регулированию это зависит от ширины и высоты изделия. Есть два варианта настройки:

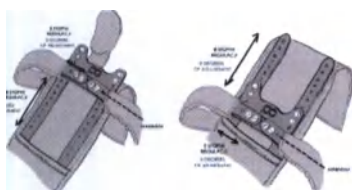

С помощью отвертки настрой высоту передних пелот

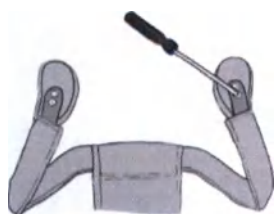

Отсоединить боковые части шнуровки и на основании измерения окружности отрезать лишний материал на талии и присоедините боковые части обратно



Если есть такая потребность существует возможность сгибания верхнего зажима да всей стойки для адаптации изделия

AM-WSP-07/TLSO




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Регулировка изделия не производится на пользователе.


Для регулировки используется отвертка, прилагаемая к изделию.

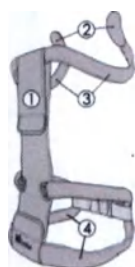

Отсоедините верхнюю пелоту чтобы с помощью отвёртки отрегулировать основание регулированию это зависит от ширины и высоты изделия. Есть два варианта настройки:



С помощью отвертки настрой высоту передних пелот

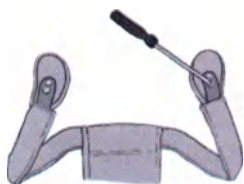

Отсоединить боковые части шнуровки и на основании измерения окружности отрезать лишний материал на талии и присоедините боковые части обратно



Если есть такая потребность существует возможность сгибания верхнего зажима да всей стойки для адаптации изделия

ОТ-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



ОТ-02




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Установите ортез в нижней части спины.

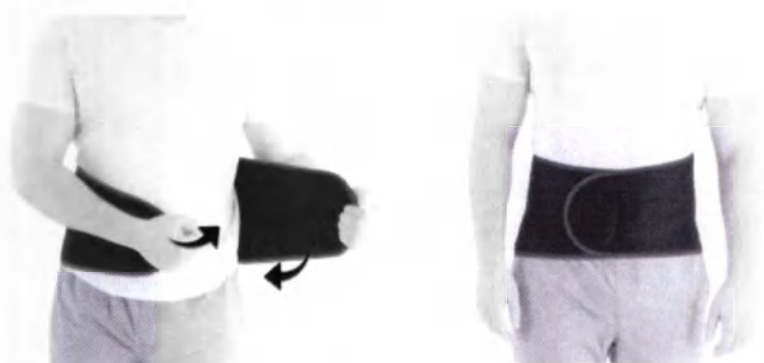

Застежка спереди на липучку
Готовое изделие.

ОТ-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.







Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

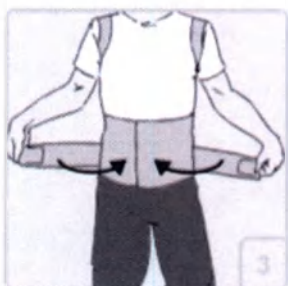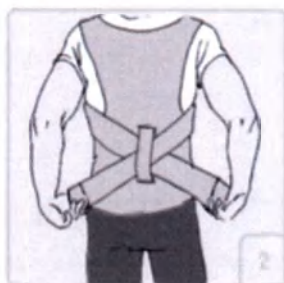

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

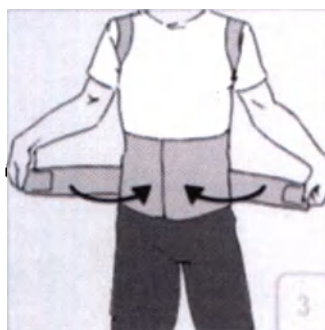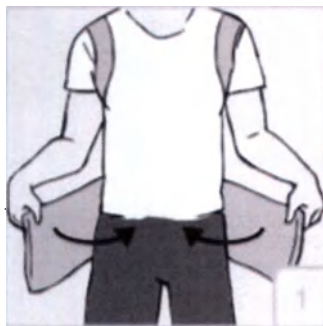

ОТ-06



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.





Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AR-SO-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AR-SO-01 (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Установите ортез в нижнюю часть спины и закрепите переднюю часть ортеза



Пристегните ремни



Готовое изделие.

AR-SO-01/BEŽ



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AR-SO-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.






Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

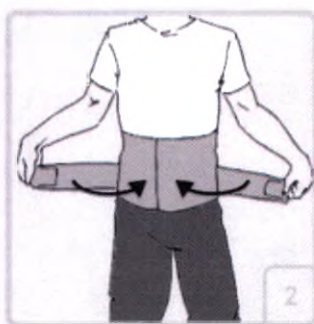

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке

ниже.



ЕВ-LK-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

ниже.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке



U-LK



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Установите ортез в нижнюю часть спины и закрепите переднюю часть ортеза.



Пристегните ремни



Готовое изделие


AS-LK-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

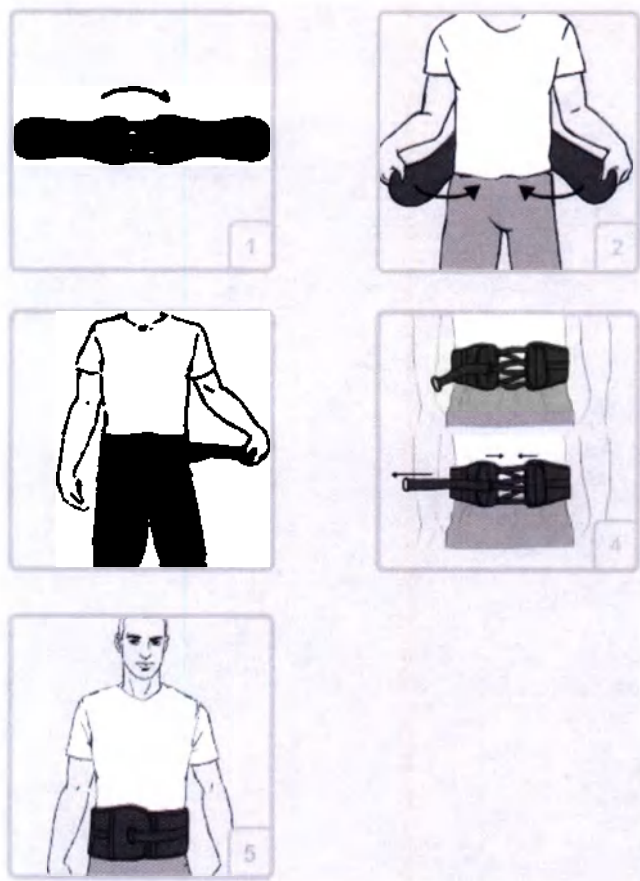


AR-WSP-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

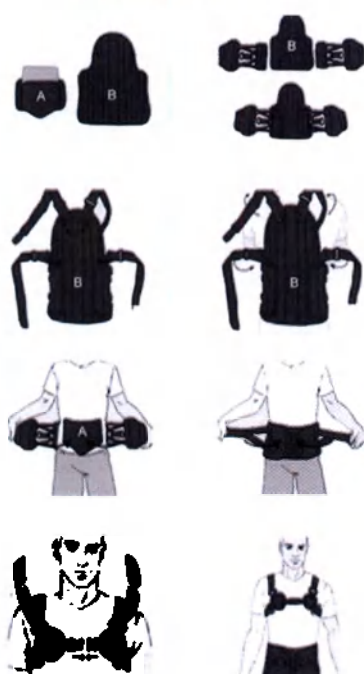



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

Первый уровень стабилизации (легкий)



Отрегулируйте заднюю часть ортеза
Прикрепите боковые пелоты к передней части изделия
Отрегулируйте и застегните пасы
Правильно установленный ортез

Второй уровень стабилизации(средний)



1)Прикрепите часть TLSO к панели заднего ортеза
2)Застегни и отрегулируй подмышки
3)Отрегулируйте и застегните передний грудной пояс
4)Правильно установленный ортез

Третий уровень стабилизации(сложный)



4. Włóż wkład do panelu przedniego ortezu.

5. Dopasuj linę części ortozy.

1)Измерьте высоту от лобкового симфиза до шейного отдела грудины
2)Выймите пластиковую вставку з пелоты передней
3)Установите ответственную высоту мостового основания
4)Вставьте основания до передней панели ортеза



5)Отрегулируйте заднюю часть ортеза
6)Пристегните боковые пелоты до переда изделия
7)Отрегулируйте и застегните ремни

- 8) Пристегните часть TLSO к задней панели ортеза
- 9) Застегните пряжки и отрегулируйте ремни


AR-WSP-02/B



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

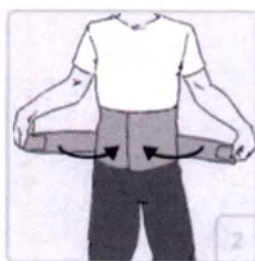

AM-PES-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Проденьте ремни через петлю (1) и наденьте ортез на плечи (2).
Закрепите переднюю часть ортеза на липучке



Готовое изделие

AM-PES-01 (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Наденьте ортез на плечи



Проденьте полоски через шлевку



Закрепите переднюю часть ортопедии на липучке



Готовое изделие

AM-SO-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



AM-SO-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-SO-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

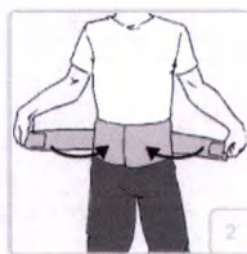


AM-SO-04



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

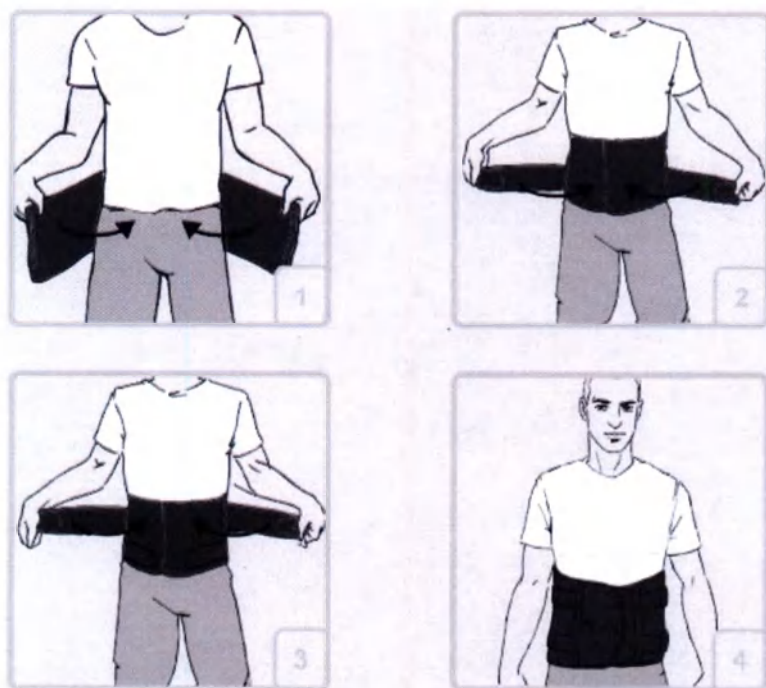


AM-SO-05



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

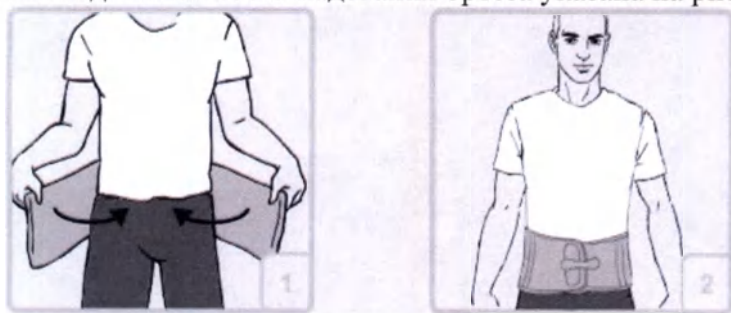


AM-SO-06



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

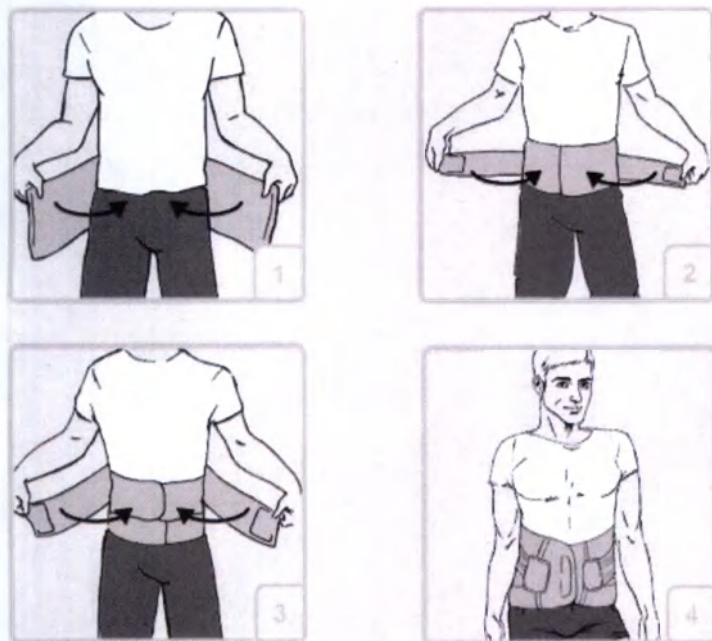


AM-WSP-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

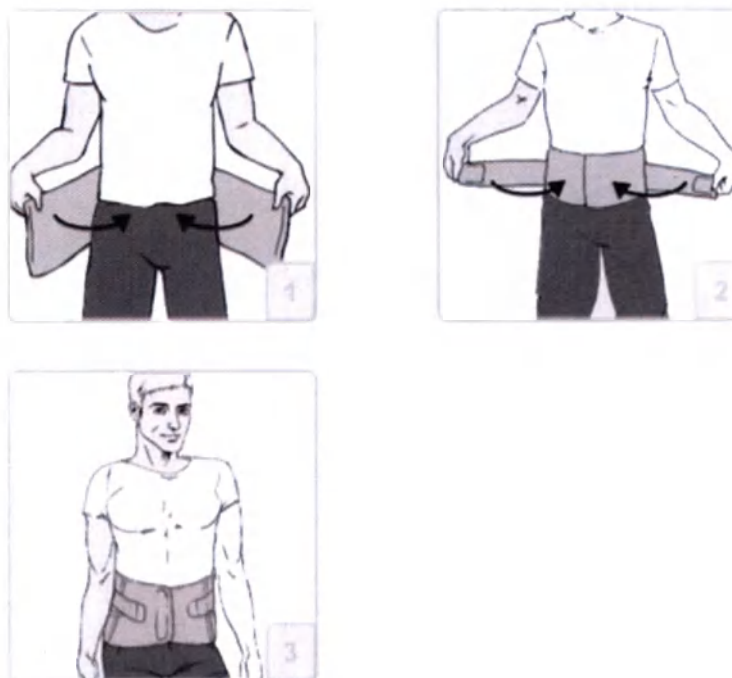

AM-WSP-01 (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Установите ортез в нижнюю часть спины и закрепите переднюю часть ортеза.



Пристегните затяжные ремни




Готовое изделие

AM-WSP-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

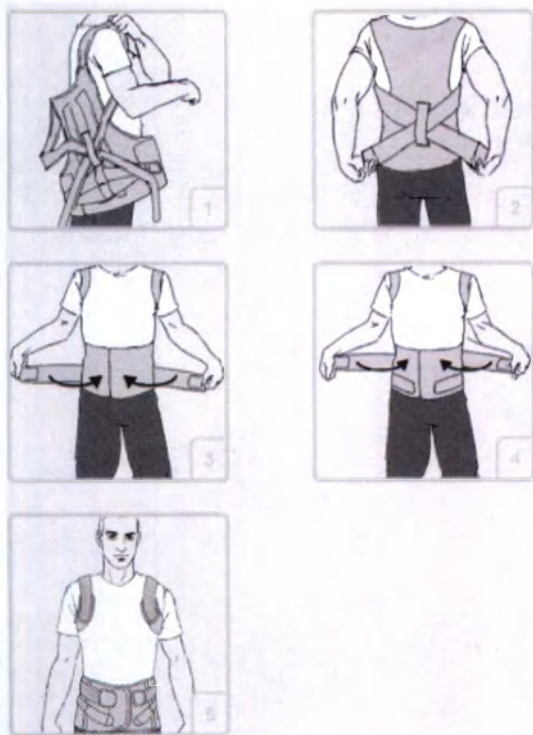

AM-WSP-03


его



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

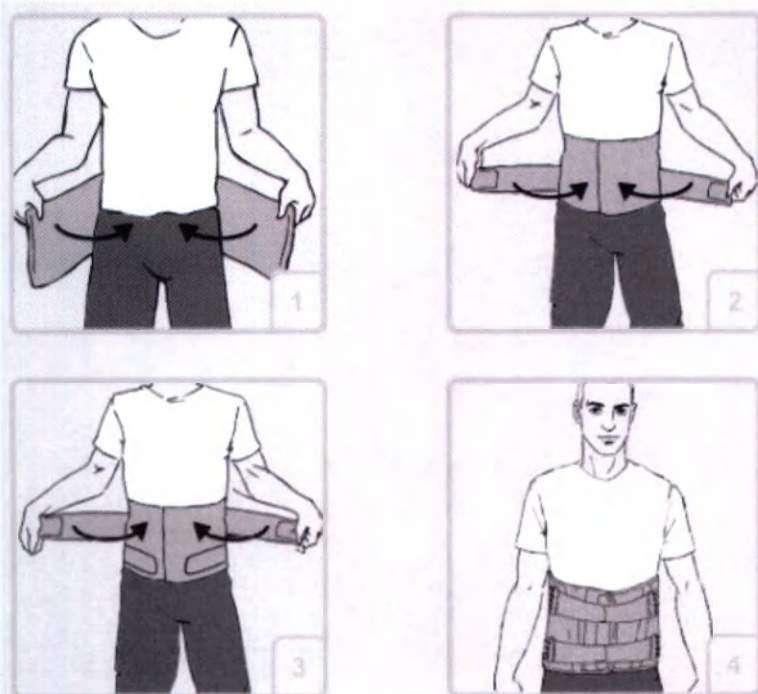



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

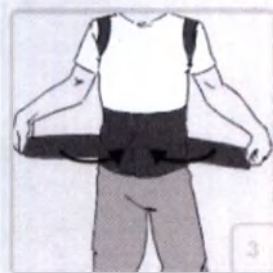

AM-WSP-06



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.




AM-WSP-06 (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.


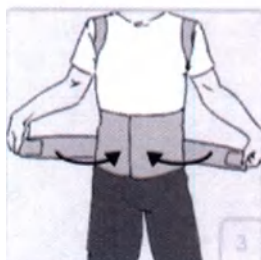




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

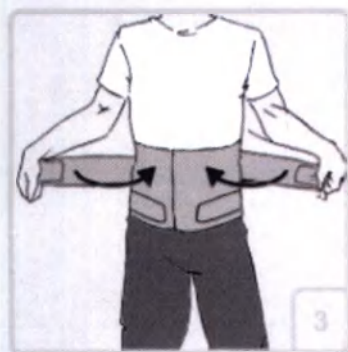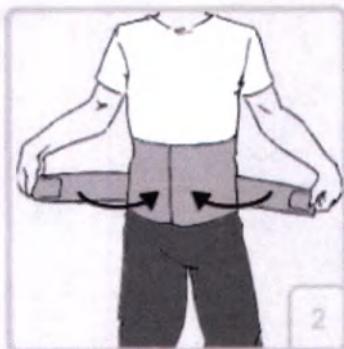


AS-LK



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже.

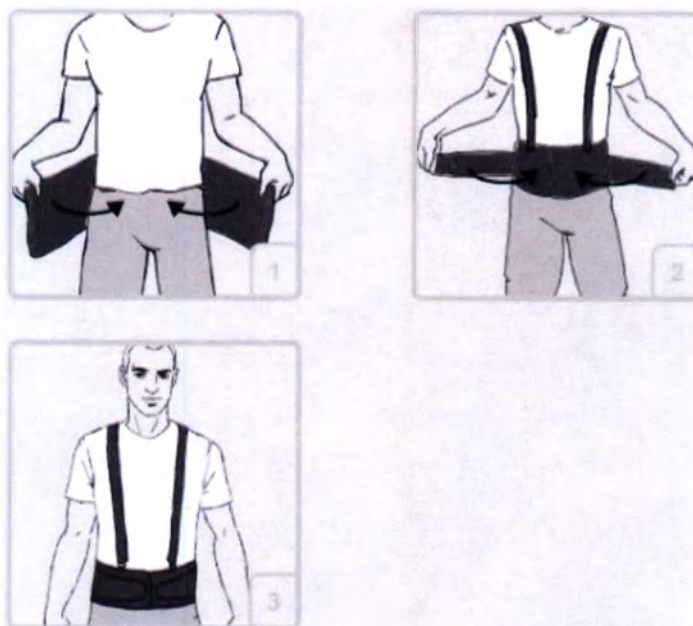

AS-LK-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже






Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

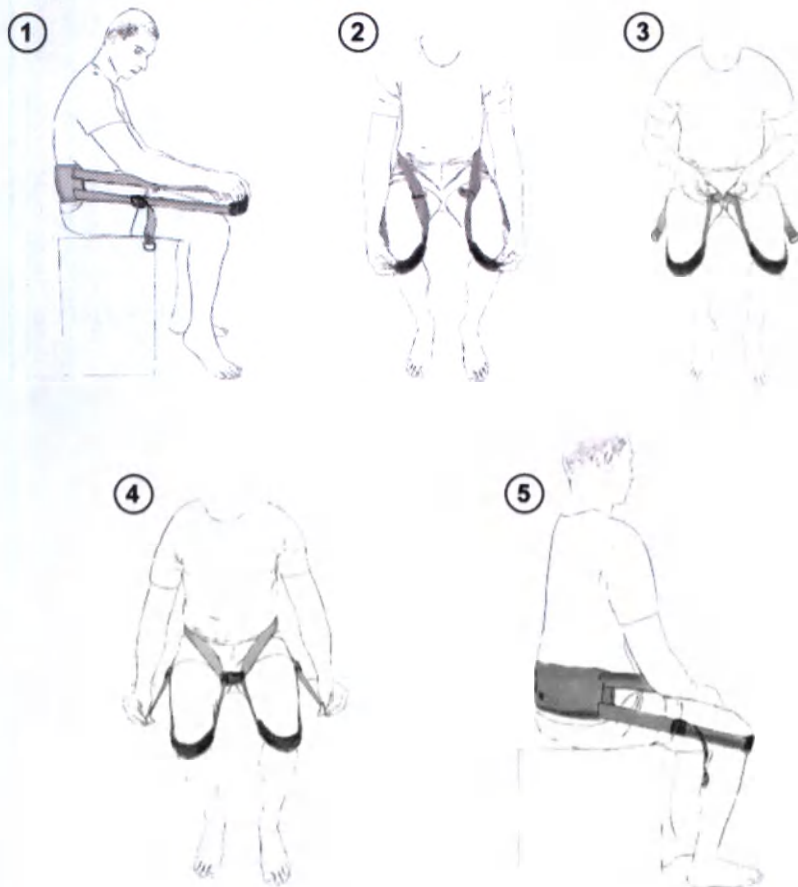

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Установите ортез в нижней части спины и закрепите переднюю часть ортеза установите ортез в нижней части спины и закрепите переднюю часть ортеза.



Пристегните ремни



Готовое изделие

MS-T-02/TLSO PLUS



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

MS-T-01/LSO PLUS



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

1



2



MS-T-02/TLSO



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-WSP-08



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-WSP-09



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

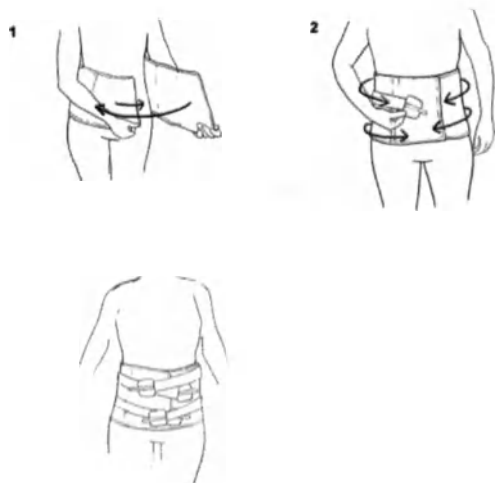


AM-WSP-10



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

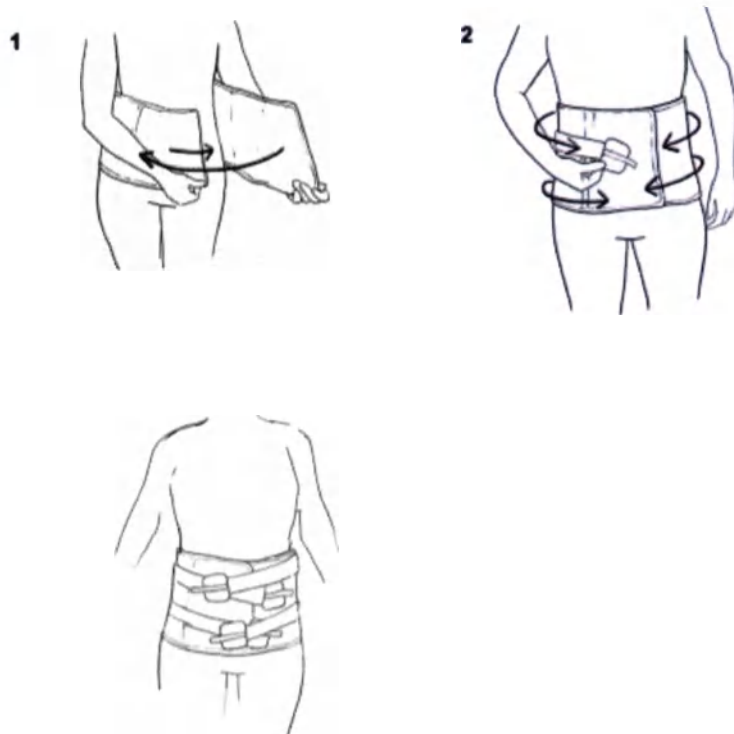


MS-T-01/TLSO PLUS



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

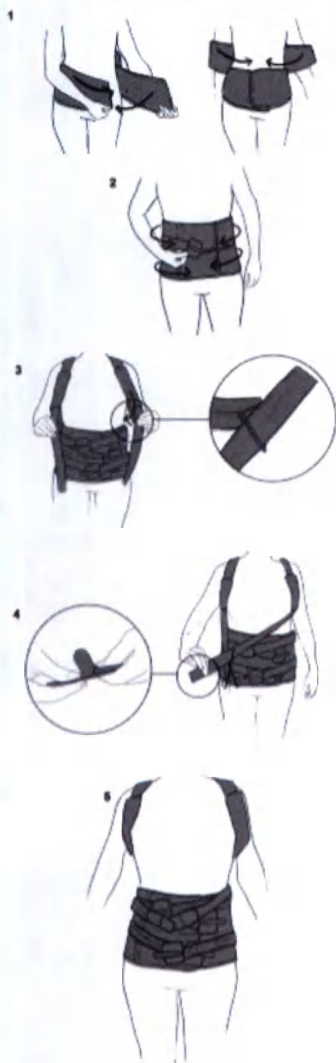


MS-T-01/TLSO



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

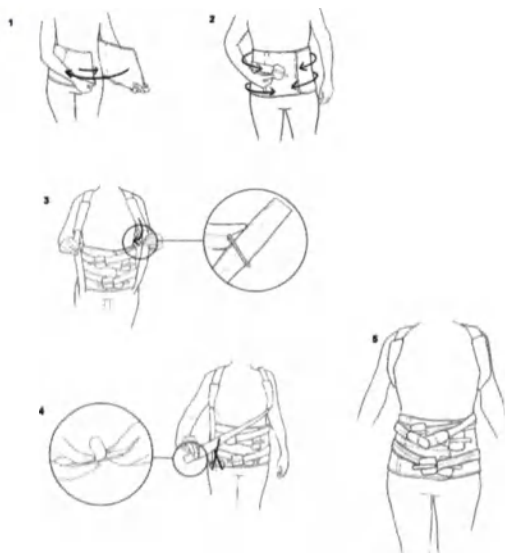

FIX-T-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Ослабьте заднюю застежку (1) и раздвиньте молнию (2).



Наденьте ортез на плечи
Задвиньте ползунок спереди

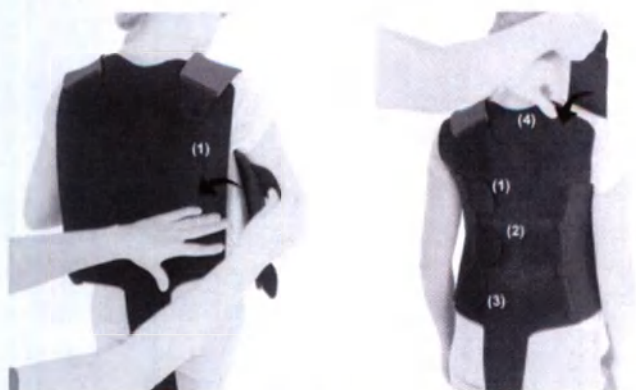

Установите соответствующее сжатие и закрепите липучки по очереди (справа и слева) по указанному порядку



Застегните ремень промежности на передней части жилета



Готовое изделие

FIX-T-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Установите ортез в нижней части спины и застегнуть на липучку
Пристегните ремни



Готовое изделие.



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже





Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

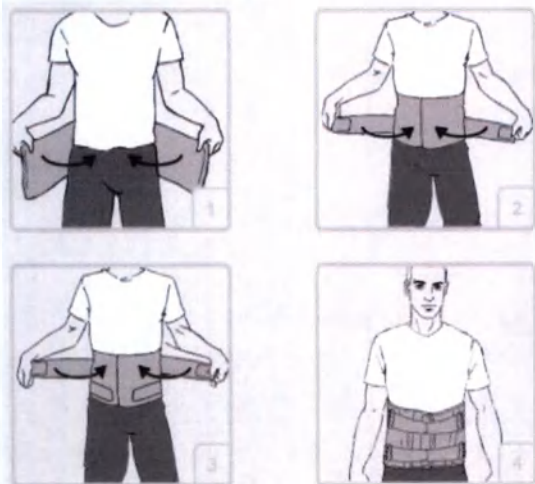

ОТ-34



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-33



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-32



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-32



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




ОТ-31



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

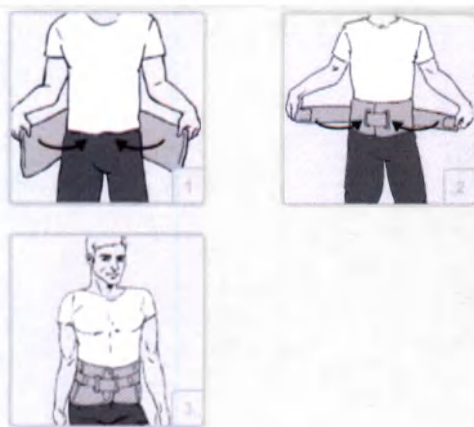

OT-30



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



OT-29



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-28



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на плечи



Закрепите переднюю часть ортопедии на липучке.



Пристегните ремни



Установите соответствующее сжатие подтяжек и закрепите его на застежке спереди.



Готовое изделие


ОТ-27



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

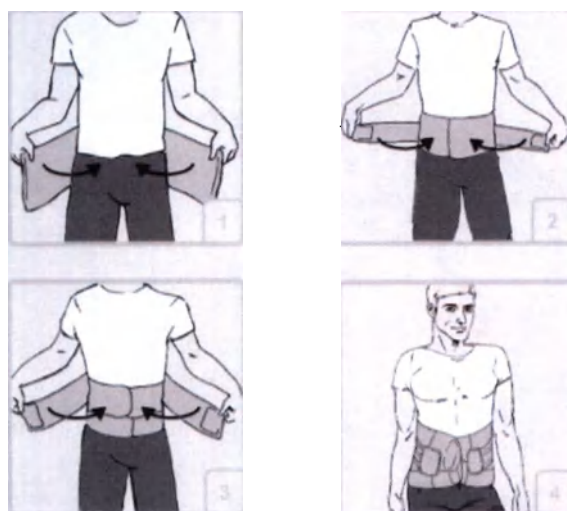


ОТ-26



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

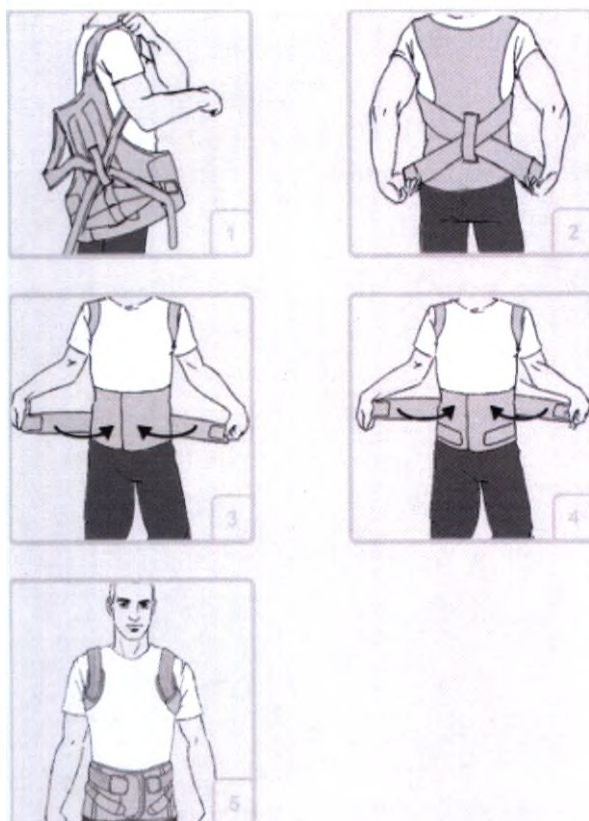


ОТ-25



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

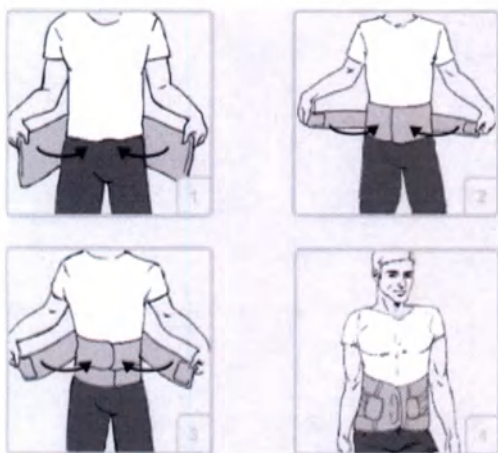

ОТ-24



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-23



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




ОТ-22




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

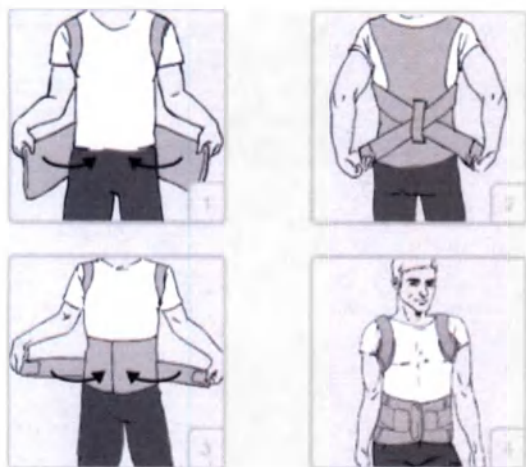

ОТ-18

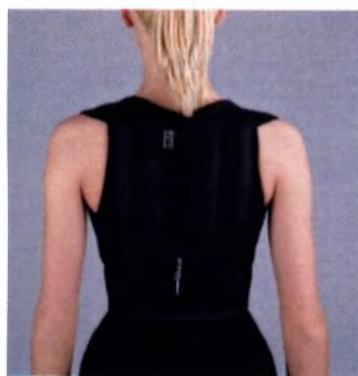

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Проденьте полоски через петлю (1) и наденьте плечевой бандаж (2).
Закрепите переднюю часть ортеза на липучке



Готовое изделие

4ARMY-TX-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-09




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



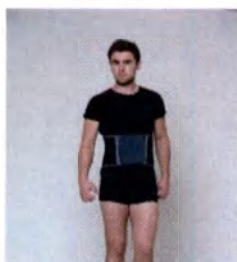


Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




АМ-GJ-02

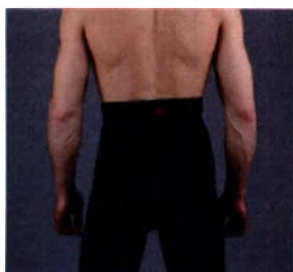

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

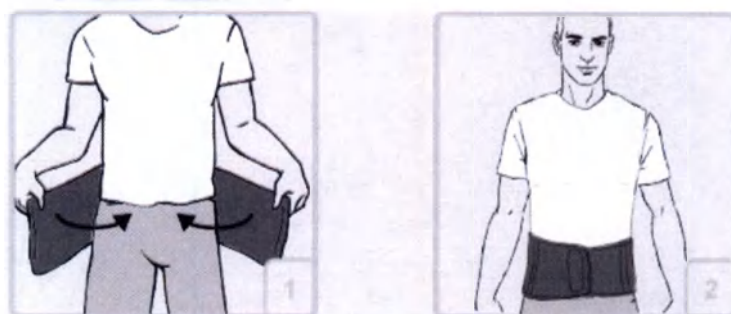

АМ-DPB (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-DPZ (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-38



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ТВ-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



PCO-T-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Расстегните заднюю часть жилета



Одень ортез

Отрегулируйте правильное сжатие ортопедии, с помощью липучки в области плеч



Закрепите заднюю часть ортопедии липучками

Если есть необходимость, исправьте или сопоставьте соответствующее сжатие продукта.



Закрепите стабилизирующий элемент в промежности.



Готовое изделие

PCO-T-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Расстегните заднюю часть жилета



Одень ортез

Отрегулируйте правильное сжатие ортопедии, с помощью липучки в области плеч



Закрепите заднюю часть ортопедии липучками

Если есть необходимость, исправьте или сопоставьте соответствующее сжатие продукта.



Закрепите стабилизирующий элемент в промежности.



Готовое изделие

PCO-T-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Расстегните заднюю часть жилета



Одень ортез

Отрегулируйте правильное сжатие ортопедии, с помощью липучки в области плеч



Закрепите заднюю часть ортопедии липучками
Если есть необходимость, исправьте или сопоставьте соответствующее сжатие продукта.



Закрепите стабилизирующий элемент в промежности.



Готовое изделие

PCO-T-04



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Расстегните заднюю часть жилета



Одень ортез

Отрегулируйте правильное сжатие ортопедии, с помощью липучки в области плеч



Закрепите заднюю часть ортопедии липучками

Если есть необходимость, исправьте или сопоставьте соответствующее сжатие продукта.



Закрепите стабилизирующий элемент в промежности.



Готовое изделие

PCO-T-09



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-10



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-11



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-16



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-17



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-18

рекомендации
Перед тем как надеть
применения
изделию.



Надевать ортез на ночь можно только по
лечащего врача.
ортез, следует ознакомиться с правилами его
указанными на изображениях, прилагаемых

PCO-T-23



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего
врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-24



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего
врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его
применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

PCO-T-25



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

AM-PES-04



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего
врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-PES-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-PES-03 (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на плечи



Закрепите переднюю часть ортопедии на липучке.




Готовое изделие



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

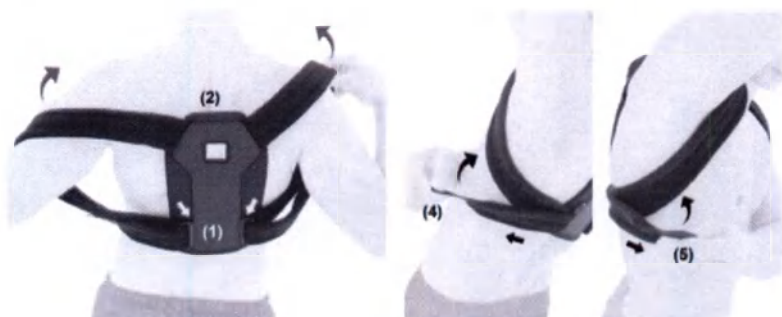

Проденьте ремни через пряжки (1) и наденьте плечевой бандаж (2). Установить соответствующую команду и застегните липучку (4 и 5).



Готовое изделие

AM-PES-02 (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

AM-TX-04




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

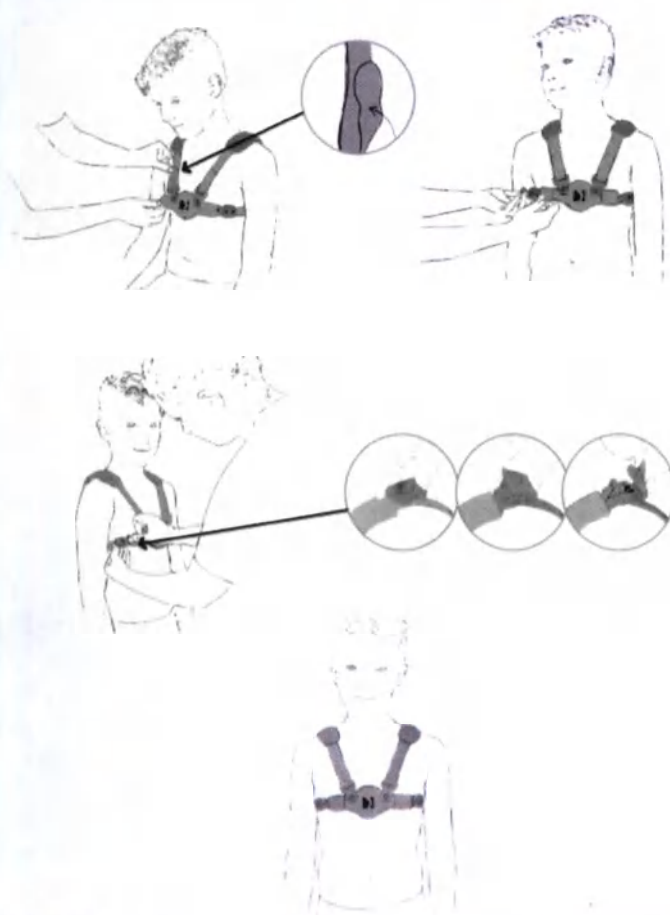


AM-TX-05

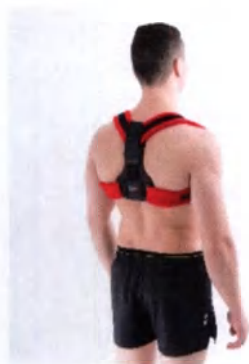

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

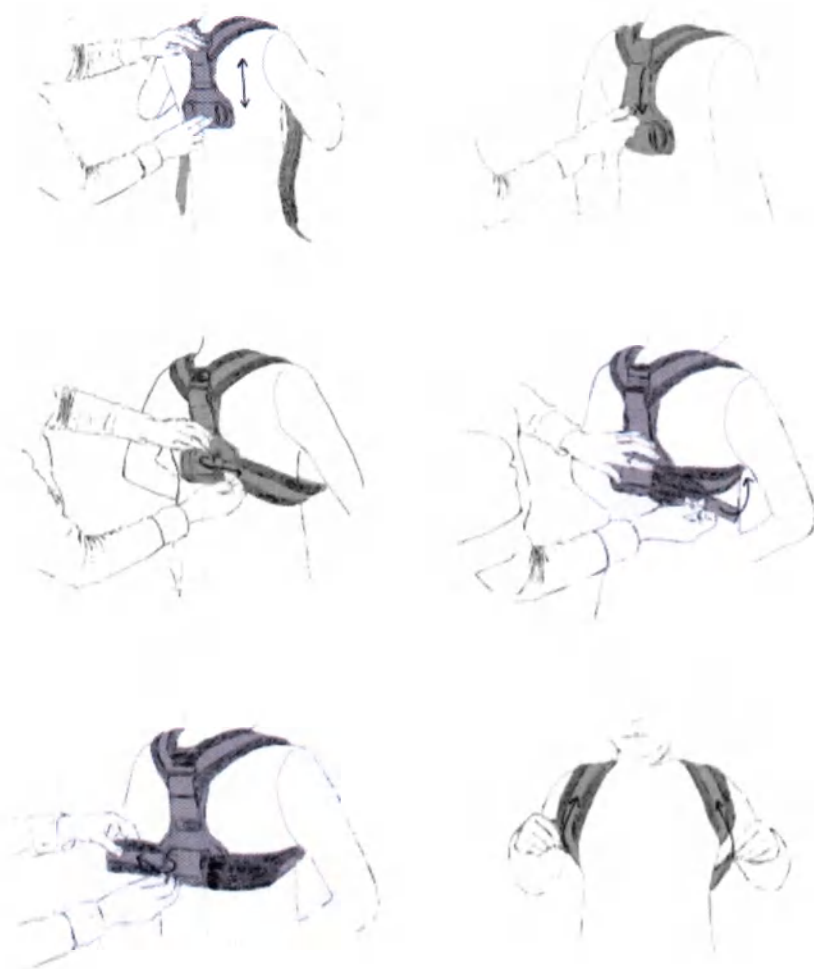

OT-21



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ОТ-20



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




ОТ-19



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

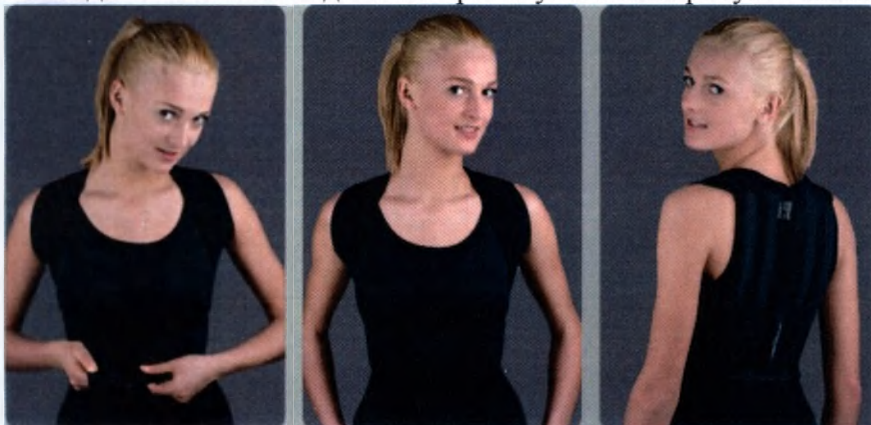

АМ-РЕS-08

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.



Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже


AM-PCS



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

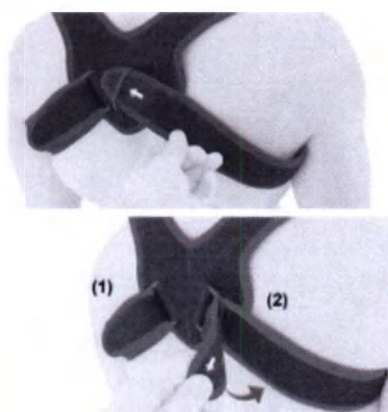

Наденьте ортез на плечи

Проденьте ремни через пряжки (1) (2) по указанного порядка. Установить соответствующий комод и застегнуть липучку



Готовое изделие

AM-PES-09




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на плечи

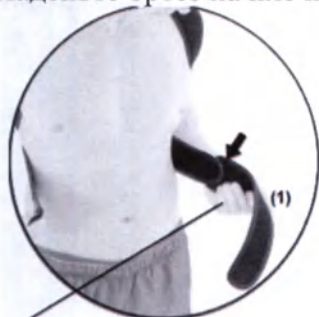

Если окружность больше, прикрепите элемент липучка (1) и пристегните ремень.



Закрепите переднюю часть ортопедии на липучке




Готовое изделие

АМ-РР



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

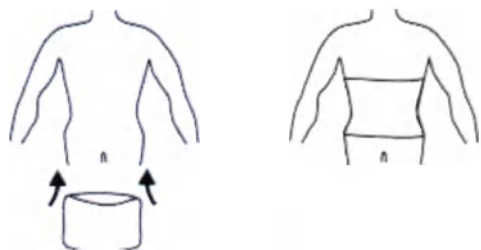

AM-1PP




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на бедра и застегните липучку (1,2).

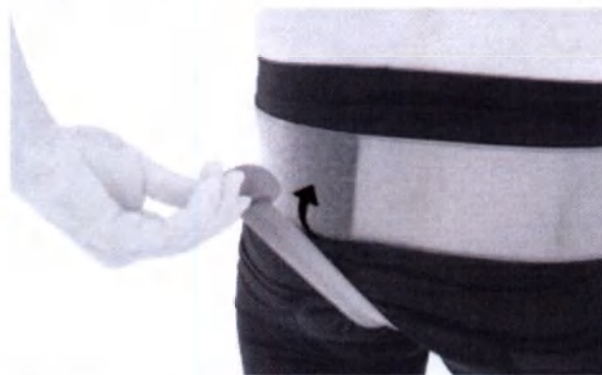

Застегните паховый ремень



Готовое изделие (спереди и сзади).

AM-2PP



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте бандаж на бедра и застегните липучку (1,2)



Застегните паховые полоски



Готовое изделие (спереди и сзади)



AM-PPB



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

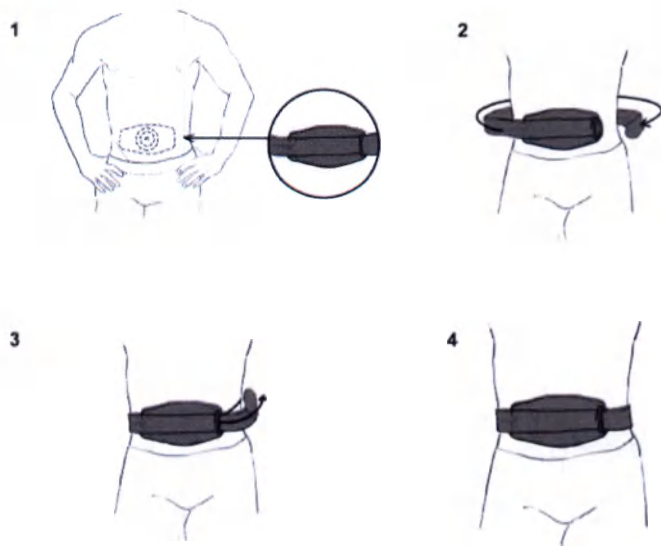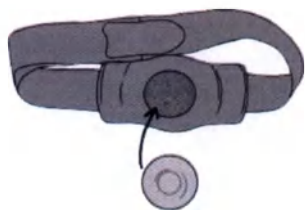

АМ-РРВ (детский)



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте пояс таким образом, чтобы силиконовая Пелота была на уровне пупка.



Застегни липучку.



Готовое изделие

AM-PC



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже






Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

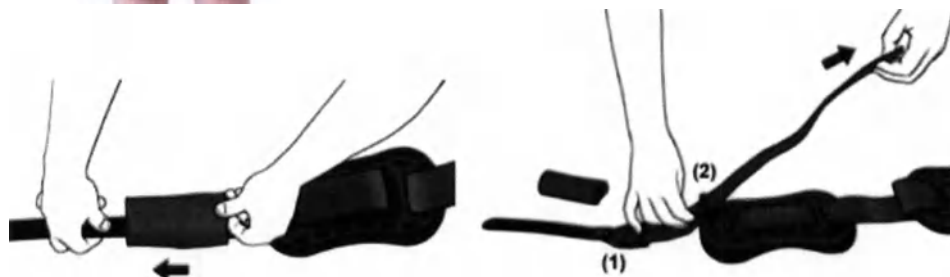

Снимите защитную крышку пряжки.
Лента из металлической пряжки (1) и регулятор (2)

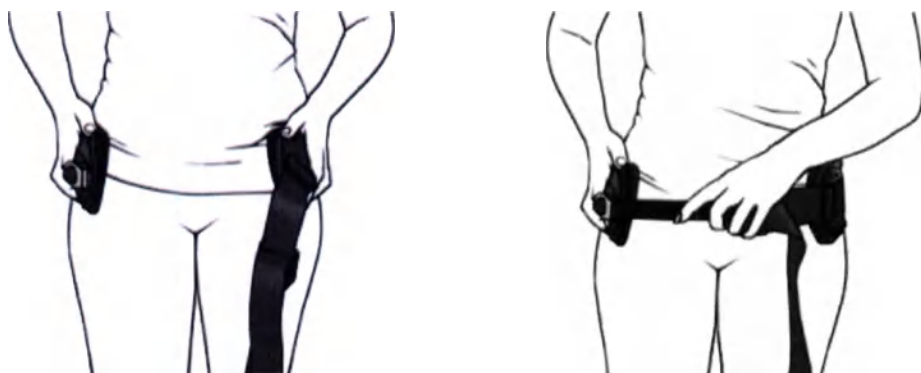

Наденьте и пристегните ремень. Помните, что пелоты должны быть симметрично на противоположных сторонах на высоте гребня подвздошной кости.



Установите правильный размер талии и пропустите ленты через регулятор




Отрегулируйте сжатие с помощью натяжителя



Расстегни и сними ремень. Наденьте защитную крышку пряжки



Снова наденьте ремень и при необходимости отрежьте лишнюю длину ремня

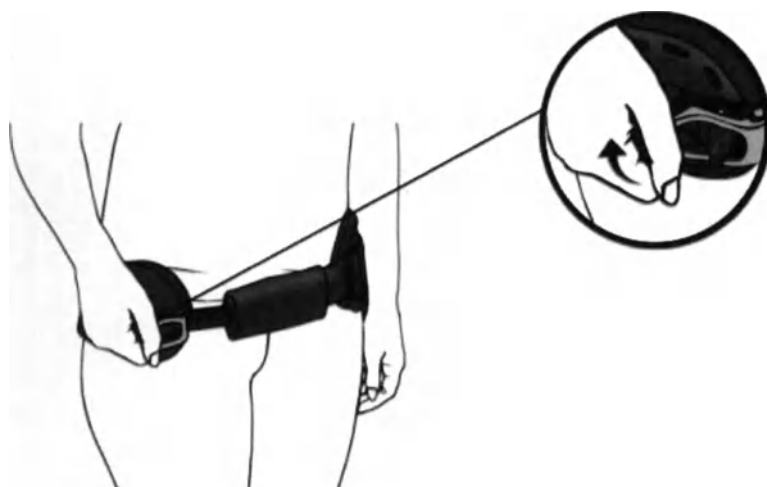

С помощью натяжной пряжки отрегулируйте соответствующее сжатие и зафиксируйте.



Готовое изделие.


AM-PC-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

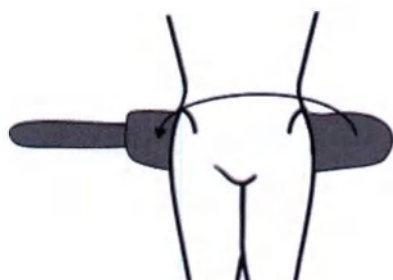




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

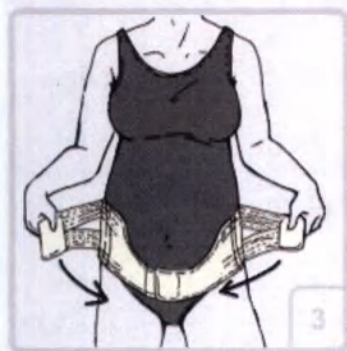

Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

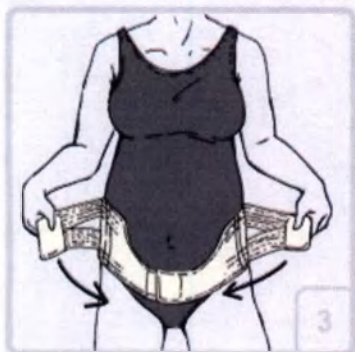

AM-OPBW



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-OPBN



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-ZPBW



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на ноги и подтяните вверх.



Готовое изделие



AM-ZPBN



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на ноги и подтяните вверх.



Готовое изделие

AM-APBW



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-APBN



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

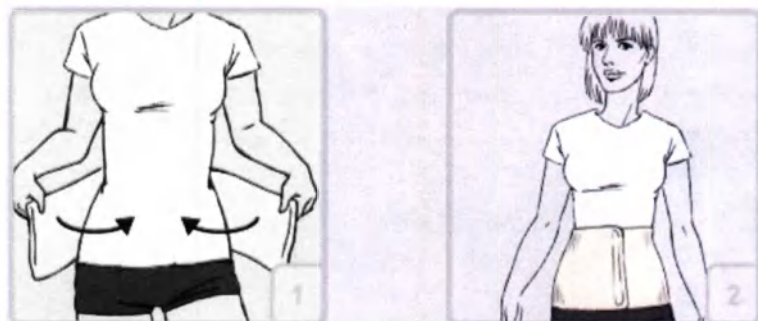

AM-PLBW



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-PLBN



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




OT-14




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

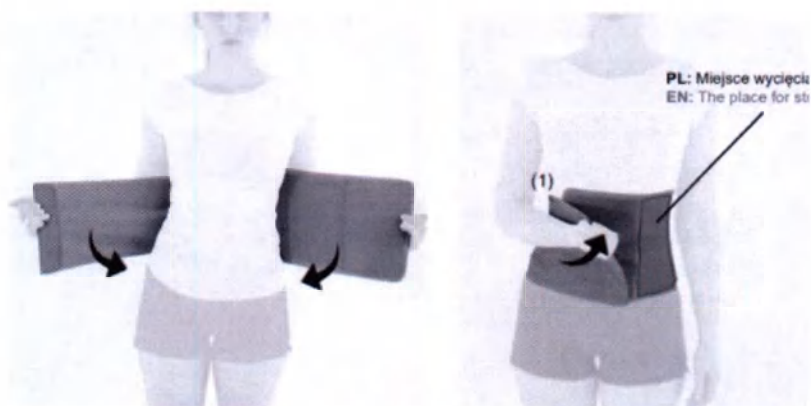

Установите ремень в нижней части спины и закрепите спереди на липучке (1).

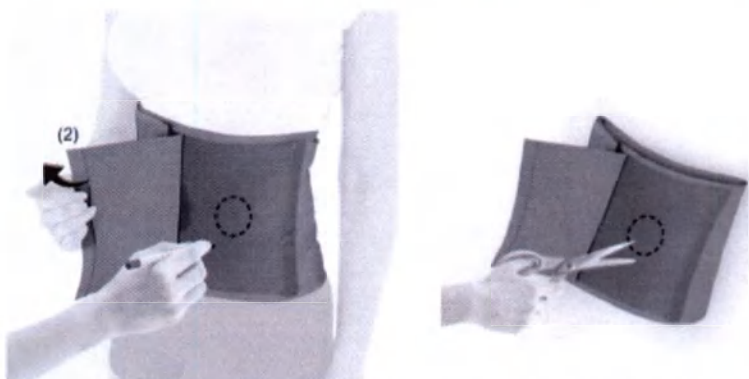

Отцепите липучку (2) и отметьте место вырезы отверстия.
Снимите ортез и вырежьте отверстие.

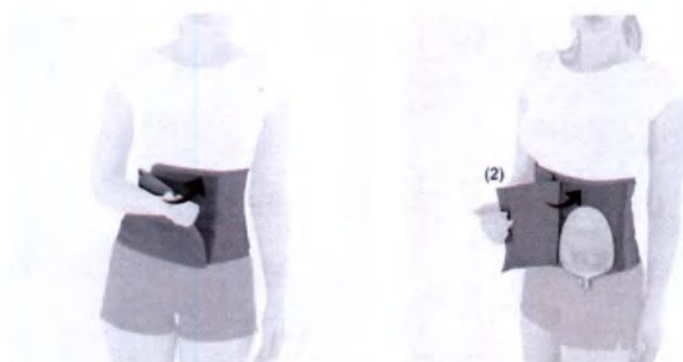

Наденьте ортопедию снова: закрепите мешок для стомы и застегните липучку (2)



Готовое изделие.

4ARMY-TX-05



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на ноги и подтяните вверх.



Готовое изделие

4ARMY-TX-04



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



4ARMY-TX-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.
Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже




AM-SO-09



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

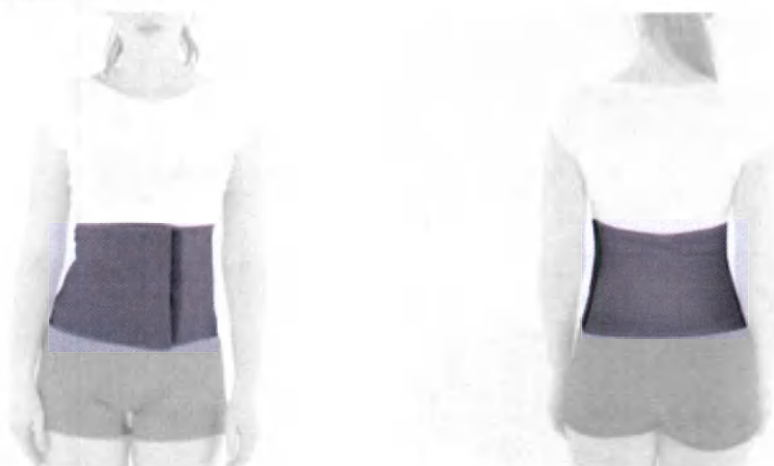

OT-12



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-TX-02



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-PZM



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.


Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже





Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

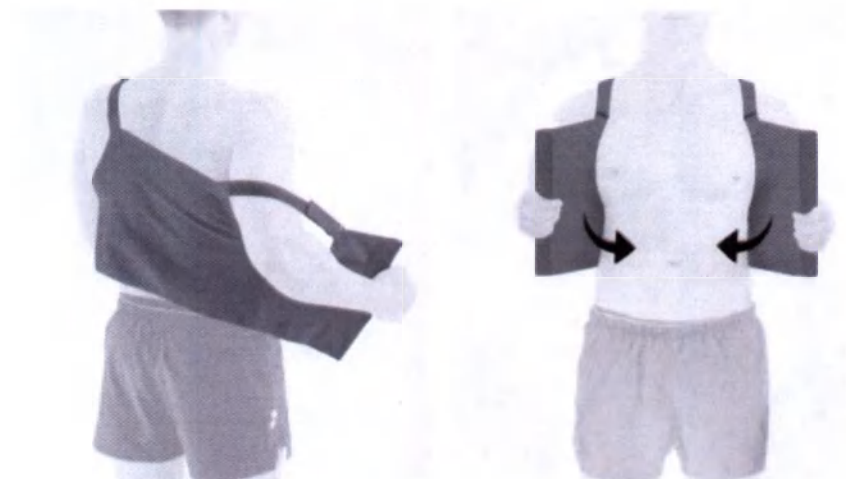

Наденьте ортез на плечи и закрепите липучку спереди.



Установите правильную длину подтяжек с помощью липучек.



Готовое изделие

4ARMY-TX-03



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-SO-10



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-TX-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

AM-PZM



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-PZD



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-PZM-02/M



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



AM-TX-10



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Установите ортез на ребристые линии и закрепите спереди на липучке.



Готовое изделие.

OT-11




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Наденьте ортез на ноги и подтяните вверх.

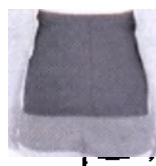

Готовое изделие

OT-15



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ENDURO-01



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



ENDURO-02




Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже



Установите ортез в нижней части спины.

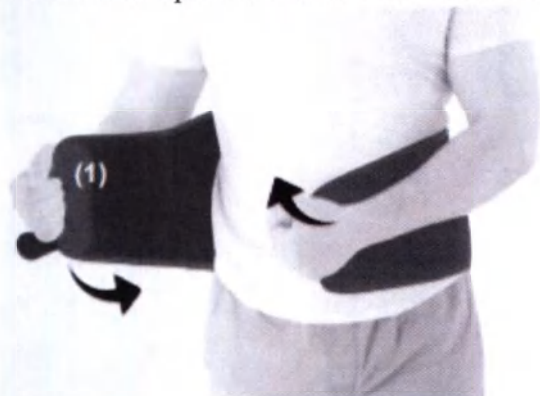

Застежка спереди на липучку (1).
Застежка спереди на липучку (2).




Готовое изделие.

AM-OM



Надевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача. Перед тем как надеть ортез, следует ознакомиться с правилами его применения указанными на изображениях, прилагаемых изделию.

Последовательность надевания ортеза указана на рисунке ниже

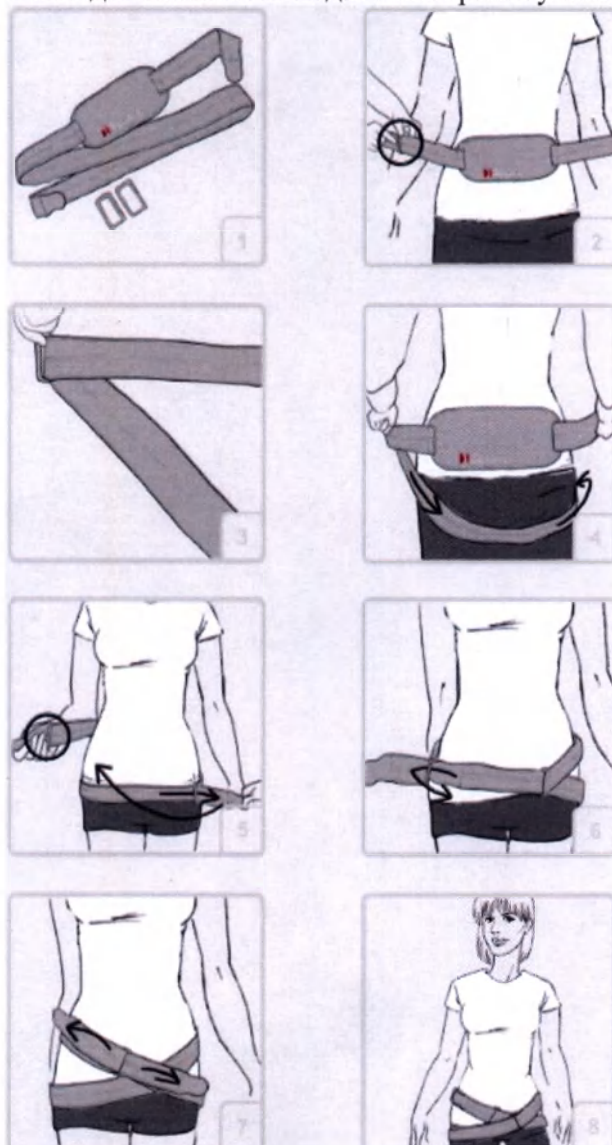

Очистка, дезинфекция

Очистка текстильной набивки.

- 1) Снять все текстильные набивки с ортеза.
- 2) Застегнуть все застёжки-липучки.
- 3) Рекомендация: использовать мешок или сетку для стирки.
- 4) Текстильные набивки стирать при температуре 30 °С, используя обычное мягкое моющее средство. Не использовать кондиционер для белья. Хорошо прополоскать.
- 5) Сушить на воздухе. Не подвергать воздействию высоких температур (например, прямые солнечные лучи, тепло от кухонных плит или батарей отопления).
- 6) Вновь закрепить текстильные набивки на отрезе.

Рама ортеза

- 1) Следует протирать детали влажной тканью по мере необходимости.
- 2) Следует сушить изделие на воздухе. Не подвергать воздействию высоких температур (например, прямые солнечные лучи, тепло от кухонных плит или батарей отопления).

Срок службы

Срок службы 5 лет

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Изделия ортопедические «REN4MAT» при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию температур от -10 °С до +60 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, без образования конденсата, при атмосферном давлении от 200 до 1500 гПа, вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.

Изделия ортопедические «REN4MAT» можно транспортировать в любом закрытом транспортном средстве. При транспортировке необходимо обеспечить защиту изделия от влажности.

Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов для температурного режима от +10 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80% и вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.

Упаковка

Изделия упаковываются в полиэтиленовые пакеты или картонные коробки, внутри которых есть руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Для целей транспортировки изделия упаковываются в общую картонную коробку.

Маркировка

Расшифровка маркировочных символов

Символ	Расшифровка
	Производитель
	Дата производства
	Соответствие директиве EEC 93/42
	Не утилизировать с бытовыми отходами
MEDICAL DEVICE CLASS 1	Медицинское изделие класса 1
SIZE / ROZMIAR	Размер
SIDE / STRONA	Сторона
Made in Poland	Сделано в Польше
Nr. ref:	Каталожный номер
	Обратитесь к инструкции по применению

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие качества изделий заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок годности изделий – 12 месяцев с даты производства, 6 месяцев с даты реализации.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения МИ

Использованные изделия и изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируются как бытовые отходы.

Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Перечень международных нормативных документов/стандартов

- PN-EN 1041+A1:2013-12 «Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем»
- PN-EN 12182:2012 «Устройства помощи для инвалидов. Основные технические требования»
- PN-EN ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования к регулированию»
- PN-EN ISO 14971:2012 «Применение менеджмента рисков в производстве медицинских изделий»
- PN - EN ISO 15223-1:2017-02 «Изделия медицинские. Символы, используемые на ярлыках медицинских изделий при их маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1. Общие требования»

«REN4MAT Славомир Вронски»
Генеральный директор

Славомир Вронски

/Штамп:
REN4MAT
ВЛАДЕЛЕЦ
Славомир Вронски/
/подпись/

/Печать:
REN4MAT Славомир Вронски
36-060 Глогув Малопольски, ул. Пяски 47
Тел. 16621-41-35 тел/факс: 16621-42-13
ИНН: 8131804393 Реестр субъектов народного хозяйства: 180151618/

**/ Штамп: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО
НОТАРИУС
БОГДАН РОЁВСКИ
НОТАРИУС
БОГДАН ЧЕРВОНКА
35-032 Жешув, ул. Замкова, 9
NIP: 813-32-81-114 тел. 853-48-01**

Номер в Реестре А 11373/2021

Удостоверяю, что 15.12.2021 г., в нотариальной конторе в Жешуве на Замковой улице 9, г-н Славомир Рышард Вронски, сын Рышарда и Алиции, проживающий по адресу: 35-321 Жешув, ул. На Скалы, 5Б, личность которого установлена на основании удостоверения личности № DCL 391405, по заявлению предпринимателя, осуществляет деятельность под названием "REN4MAT Славомир Вронски", NIP 813-180-43-93, подписал настоящий документ.

Взимается нотариальный сбор на основании §.13 расп. Мин. юстиции, от 28.06.2004 г. (Законодательный вестник № 148 пункт 1564 с поправками) в сумме 20 злотых и НДС 23% от этой суммы в размере 4 злотых 60 грошей.
Жешув, 15.12.2021 года.

Печать: БОГДАН ЧЕРВОНКА* НОТАРИУС* В ЖЕШУВЕ

**Штамп: Богдан Червонка
/подпись/
НОТАРИУС**

**Печать: БОГДАН ЧЕРВОНКА* НОТАРИУС* В ЖЕШУВЕ
/подпись/**

Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.



Российская Федерация

Город Москва

Деятнадцатого января две тысячи двадцать второго года

Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Котлярова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2022- **4-2356**
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



У.А. Родина

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью **144** лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

