




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Мегатехника"
Котченко Р.Г

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия
"Материалы упаковочные одноразовые
для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ
по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018"**

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах


Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

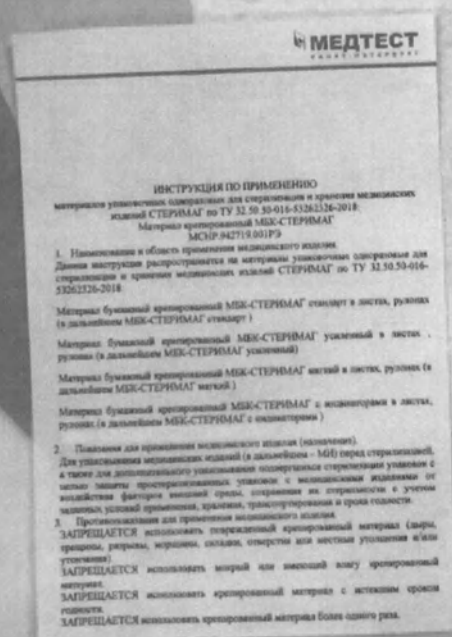

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах (обычный вид групповой упаковки)

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм. (Общий вид групповой упаковки)

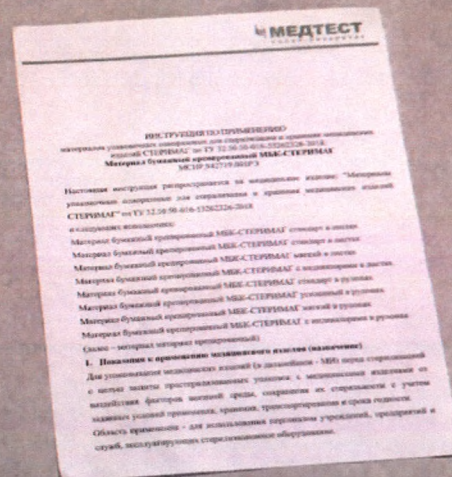

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал крепированный МБК-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.001 РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ усиленный)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ мягкий)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами)

2. Показания для применения медицинского изделия (назначение).
Для упаковывания медицинских изделий (в дальнейшем – МИ) перед стерилизацией, а также для дополнительного упаковывания подвергшихся стерилизации упаковок с целью защиты простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями от воздействия факторов внешней среды, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденный крепированный материал (дыры, трещины, разрывы, морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или утончения).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мокрый или имеющий влагу крепированный материал.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал с истекшим сроком годности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал более одного раза.

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 5 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал крепированный МБК-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.001РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ усиленный)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ мягкий)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в листах, рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами)

2. Показания для применения медицинского изделия (назначение).

Для упаковывания медицинских изделий (в дальнейшем – МИ) перед стерилизацией, а также для дополнительного упаковывания подвергнувшихся стерилизации упаковок с целью защиты простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями от воздействия факторов внешней среды, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденный крепированный материал (дыры, трещины, разрывы, морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или утончения).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мокрый или имеющий влагу крепированный материал.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал с истекшим сроком годности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал более одного раза.

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

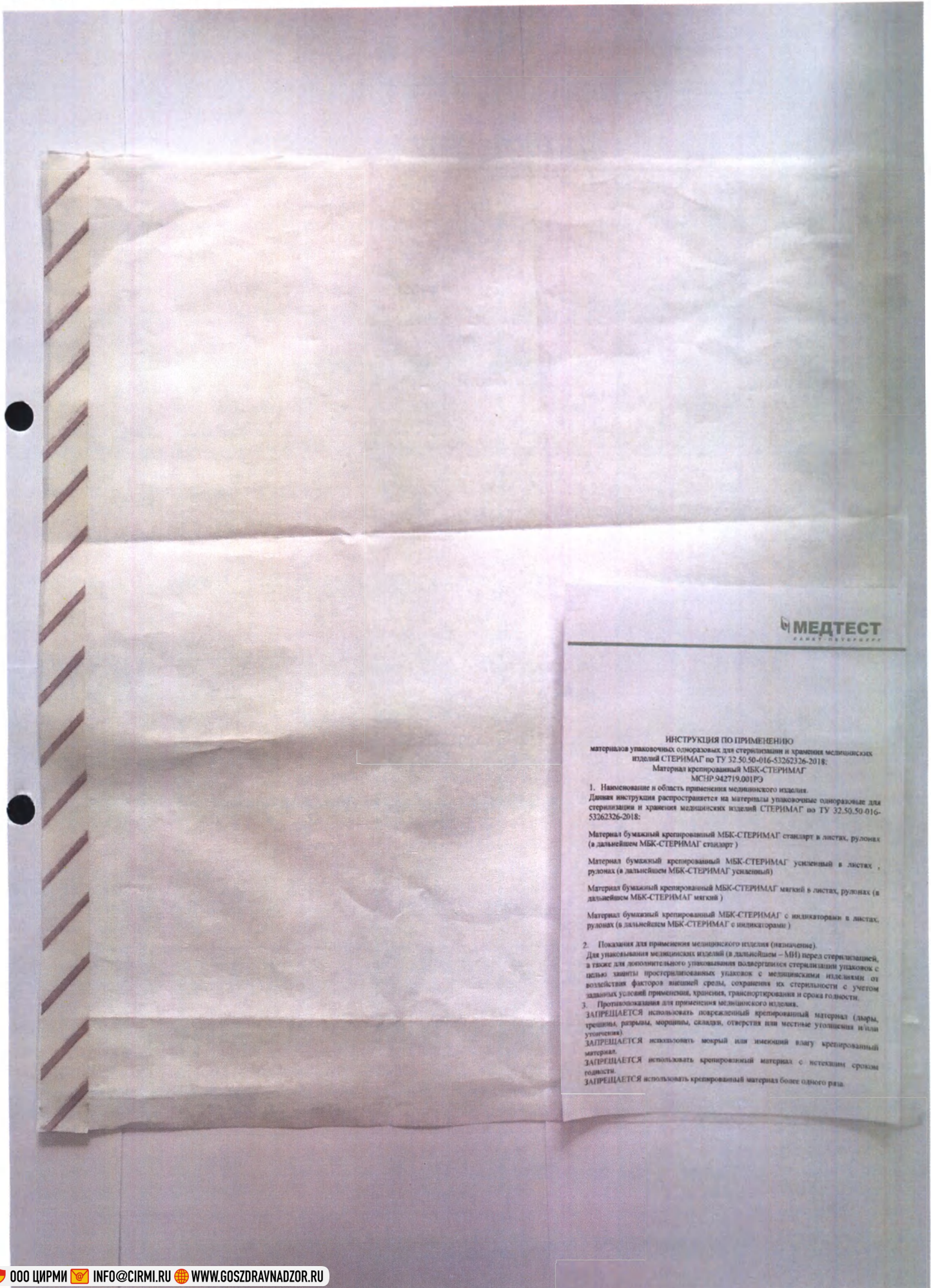

МЕДТЕСТ
SAFETY EQUIPMENT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018;
Материал крепированный МБК-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.001РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018.

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в листах,
рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ усиленный)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в листах, рулонах (в
дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ мягкий)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в листах,
рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами)

2. Показания для применения медицинского изделия (назначение).
Для упаковки медицинских изделий (в дальнейшем – МИ) перед стерилизацией,
а также для дополнительного упаковки подвергшихся стерилизации упаковок с
целью защиты простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями от
воздействия факторов внешней среды, сохранения их стерильности с учетом
заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденный крепированный материал (дыры,
трещины, разрывы, морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или
уплотнения).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать материал или имеющий влагу крепированный
материал.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал с истекшим сроком
годности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал более одного раза.

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах

(Общий вид групповой упаковки)



Фотографическое изображение


Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.



Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в рулонах


длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

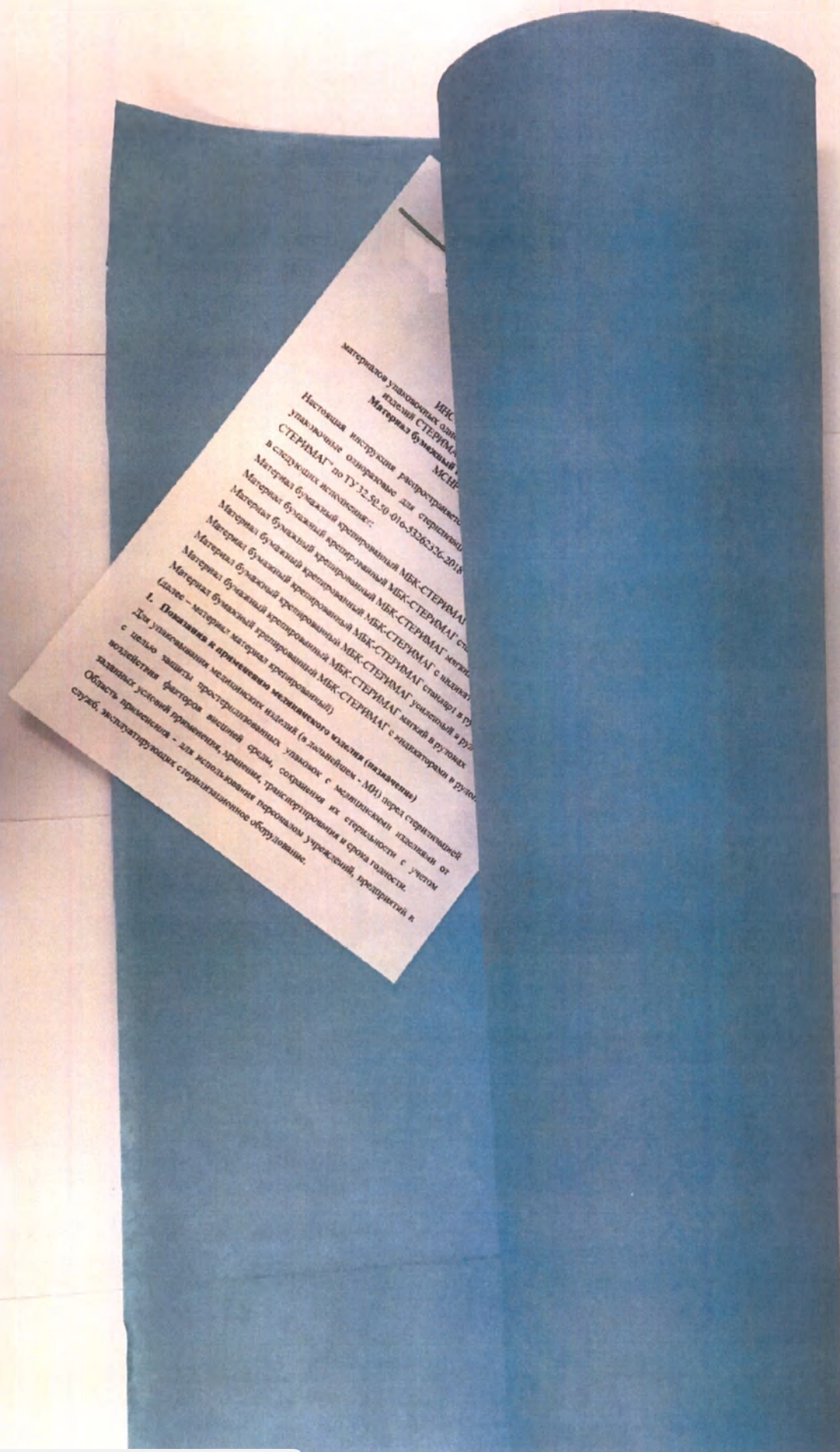

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мясной в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

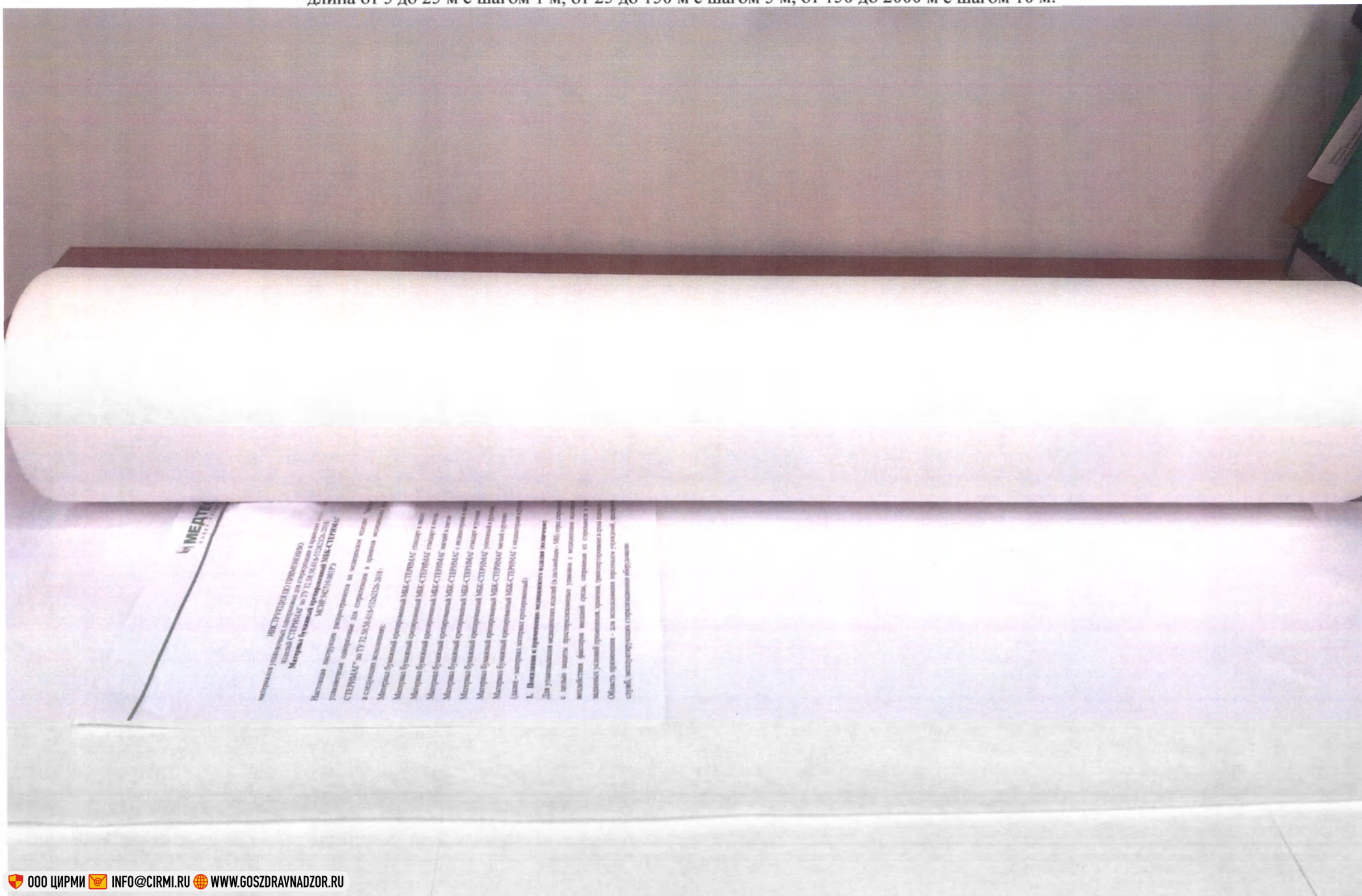

Фотографическое изображение

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-33262326-2018:
Материал крепированный МБК-СТЕРИМАГ
МСНР 947719 001РЗ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018.

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в листах,
рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ усиленный)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в листах, рулонах (в
дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ мягкий)

Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в листах,
рулонах (в дальнейшем МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами)

2. Показания для применения медицинского изделия (назначения).
Для упаковки медицинских изделий (в дальнейшем – МИ) перед стерилизацией,
а также для дополнительного упаковывания изделий после стерилизации упаковки с
целью защиты простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями от
воздействия факторов внешней среды, сохранения их стерильности с учетом
заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденный крепированный материал (царапы,
трещины, разрывы, морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или
уточнения).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мокрый или испачканный влагу крепированный
материал.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал с истекшим сроком
годности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепированный материал более одного раза.

Фотографическое изображение

Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 10 мм. (Общий вид групповой упаковки)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации
медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018
Крафт-бумага
МСНР 942719.002РЭ

Настоящая инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в листах.
Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 10 мм.


Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ 500 x 600 мм в листах по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018. Материал упаковочный одноразовый для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ.		Количество листов в упаковке	100
Конструкция для стерилизации	РЭ 2019082 в 16 10 2021 г.	Дата изготовления	14.01.22
Наименование	Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ 500 x 600 мм в листах. МСНР 942719.002РЭ.	Срок годности	01.2022
Материал	Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ 500 x 600 мм в листах. МСНР 942719.002РЭ.	Дата окончания срока годности	01.2027
Место стерилизации	Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ 500 x 600 мм в листах. МСНР 942719.002РЭ.	Хранение и транспортировка	Хранить в сухом, прохладном месте. Не допускать попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Фотографическое изображение
Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 5 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 10 мм.




Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

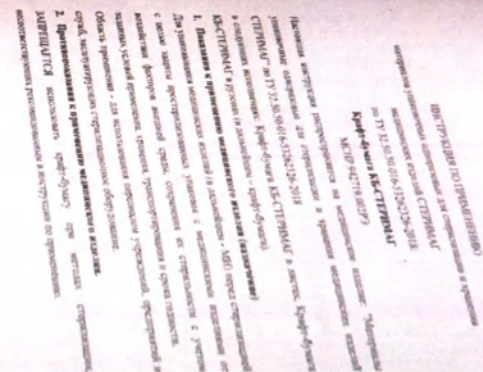

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах

400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм. (Общий вид групповой упаковки)

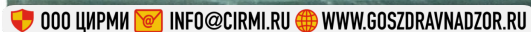

Фотографическое изображение

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.



МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских

Фотографическое изображение

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в рулонах


Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

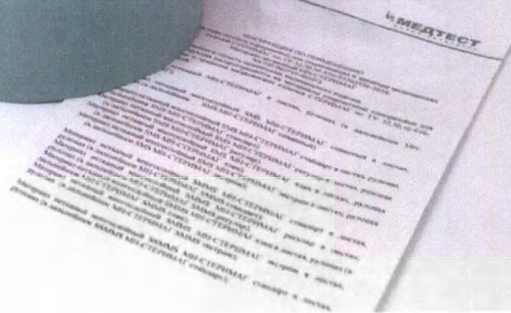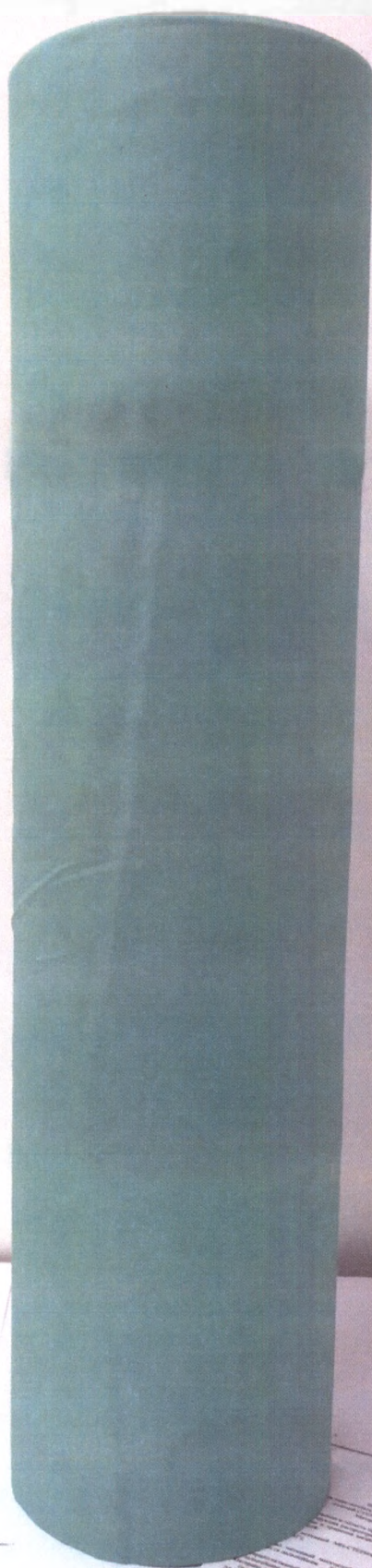

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм. (Общий вид групповой упаковки)

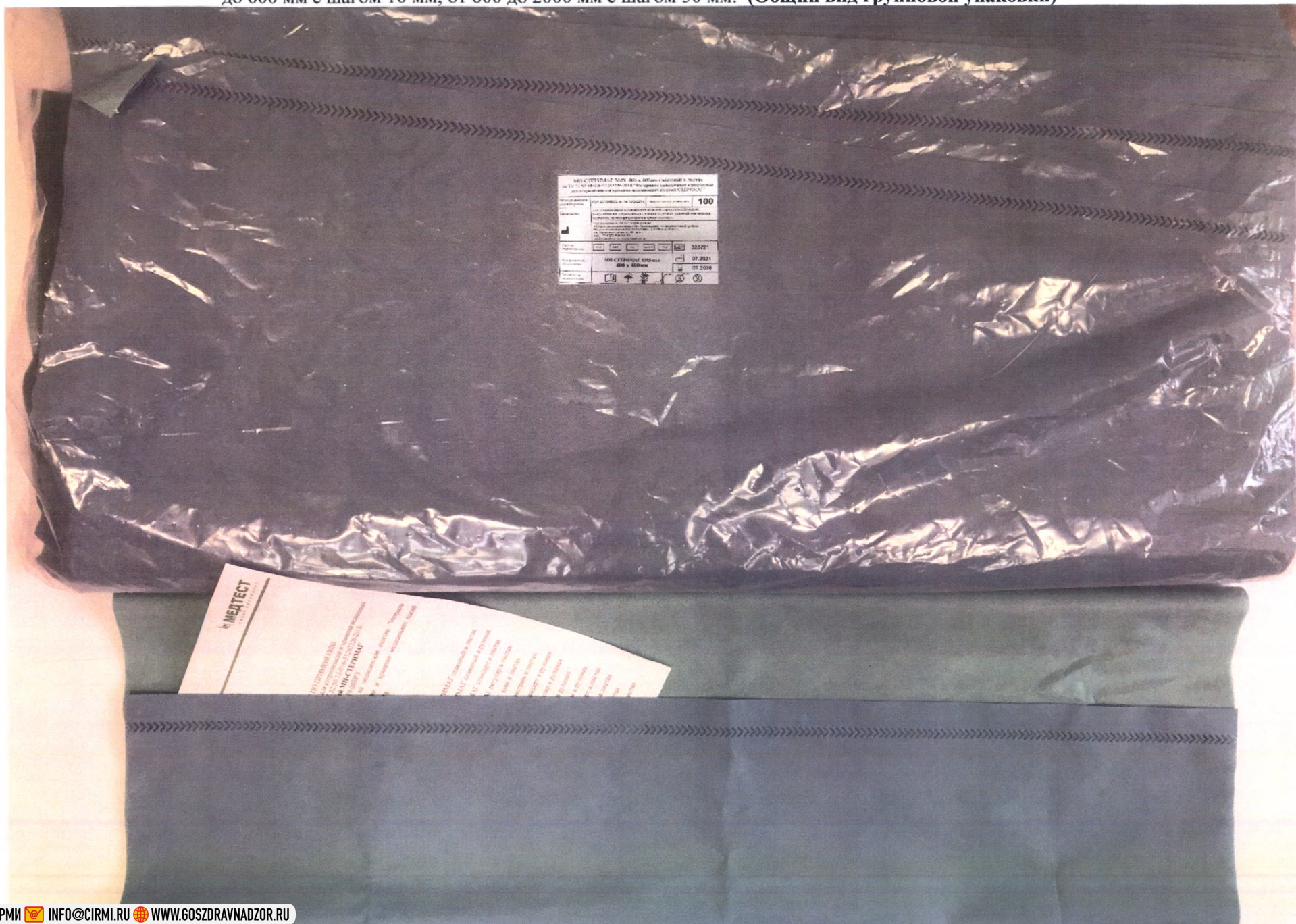

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.


МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 12.50.50-016-53262326-2018.
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСИР.942719.003РЭ
Настоящая инструкция распространяется на медицинское изделие: "Материалы
упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий"

Фотографическое изображение


Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм. (Общий вид групповой и транспортной упаковки)

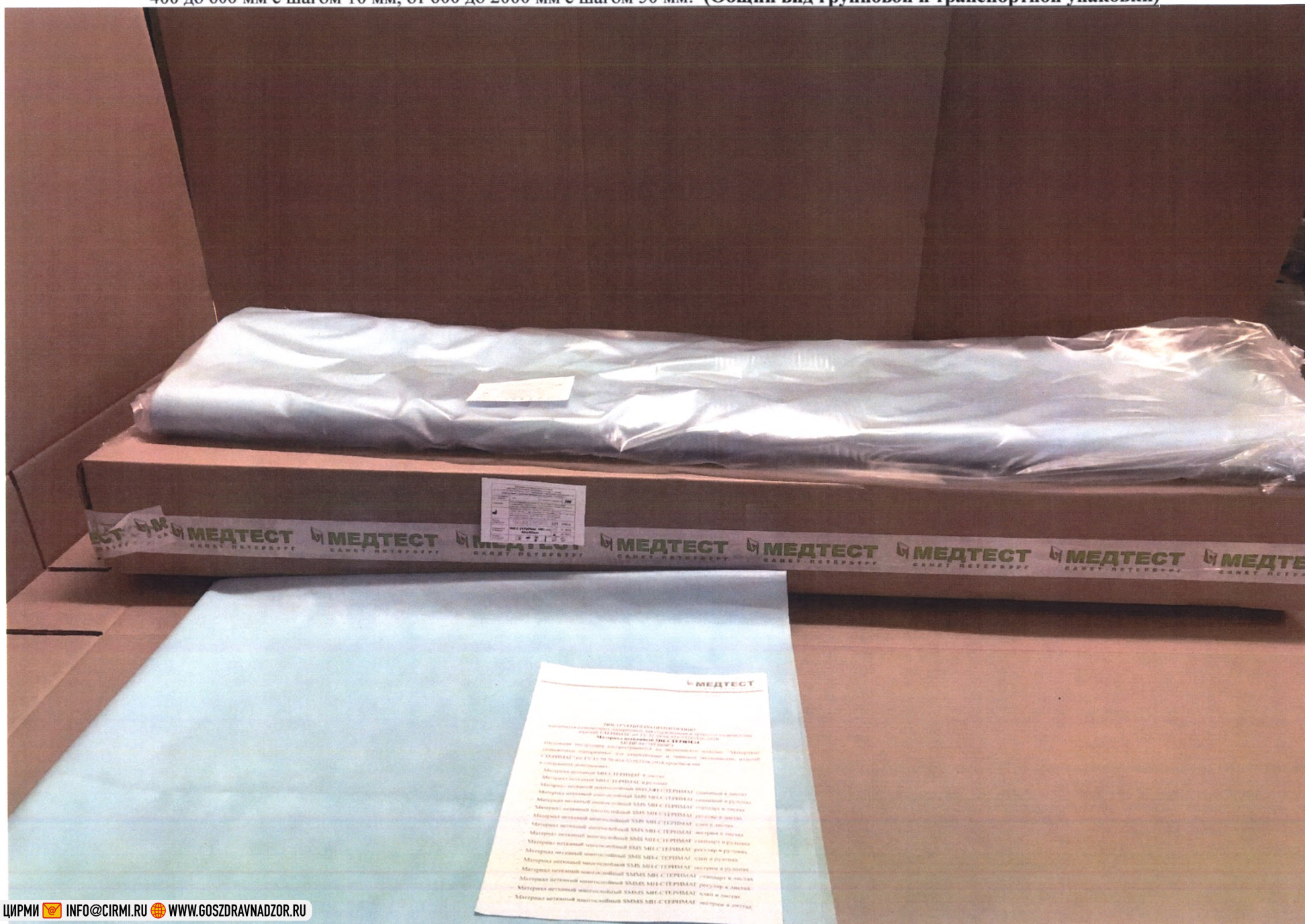

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах

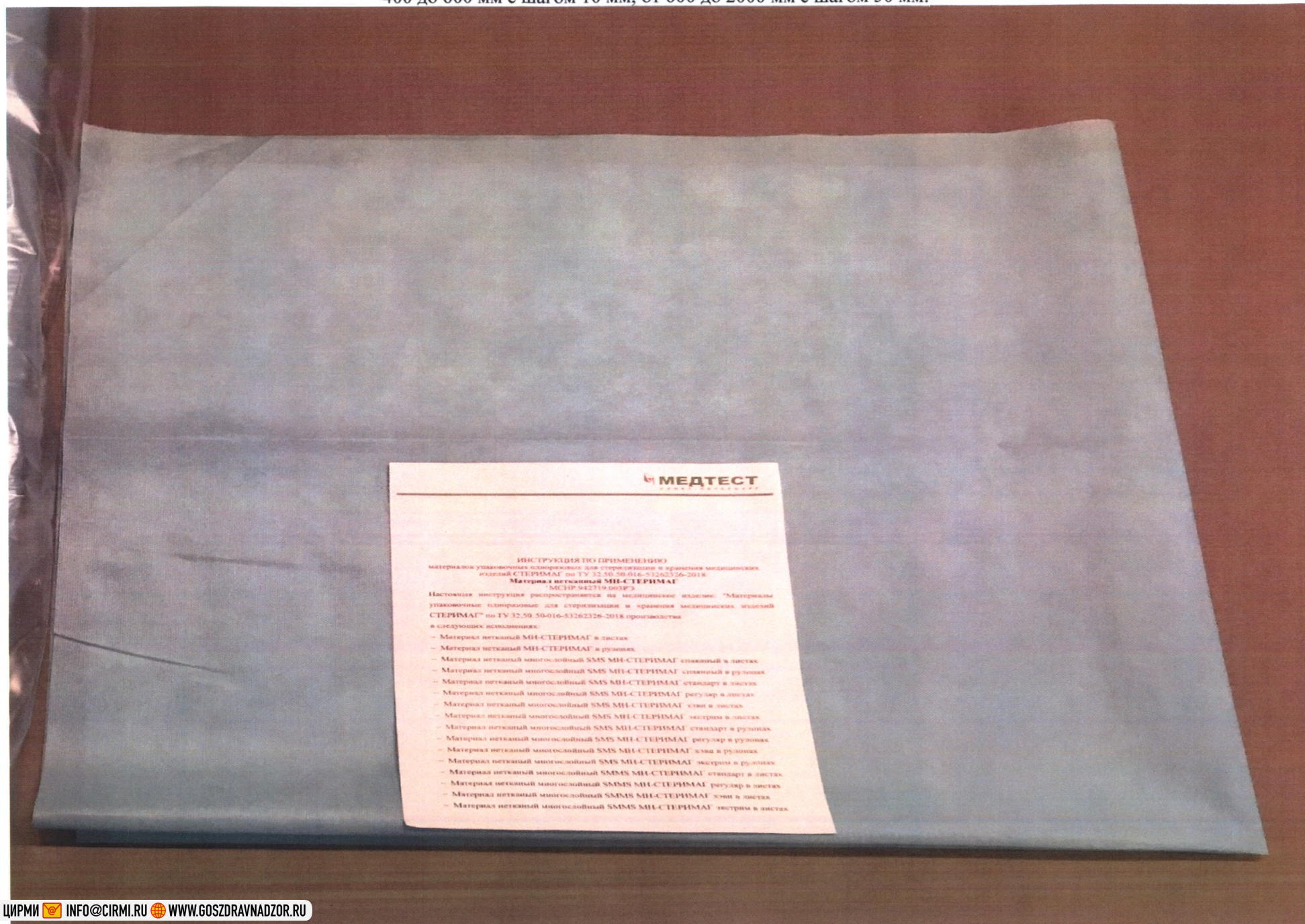

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных образцов для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР-942719.003РЗ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные образцовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMS регуляр);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

МЕДТЕСТ
НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. КАЧЕСТВО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018;
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018.

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спанбонд в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спанбонд).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ стандарт).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ регулар).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ хэви).



Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ экстрим).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт).

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах


Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

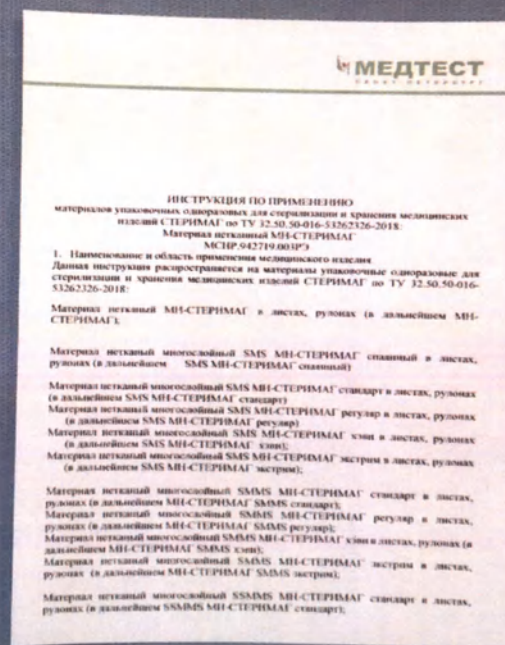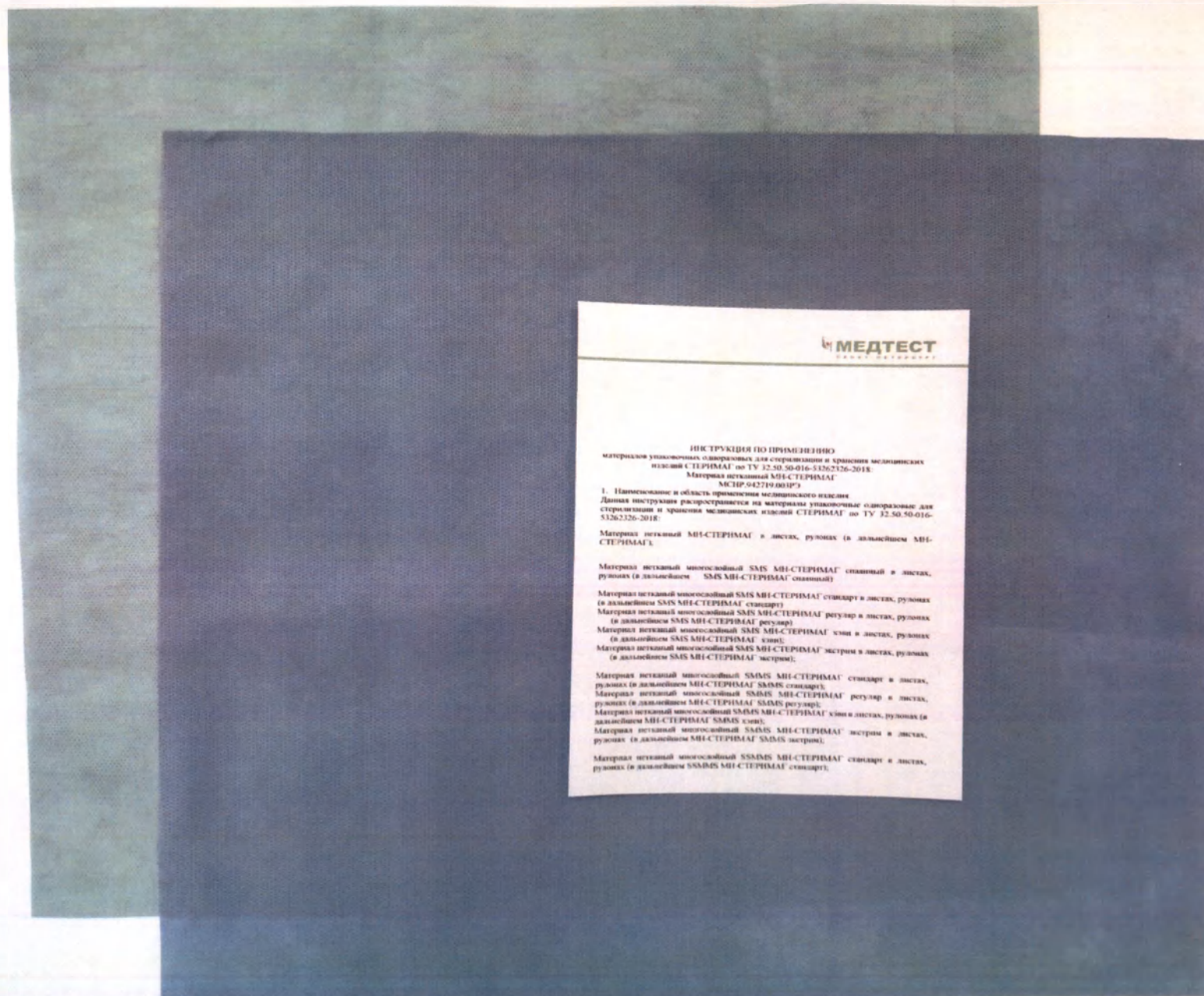

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах


Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

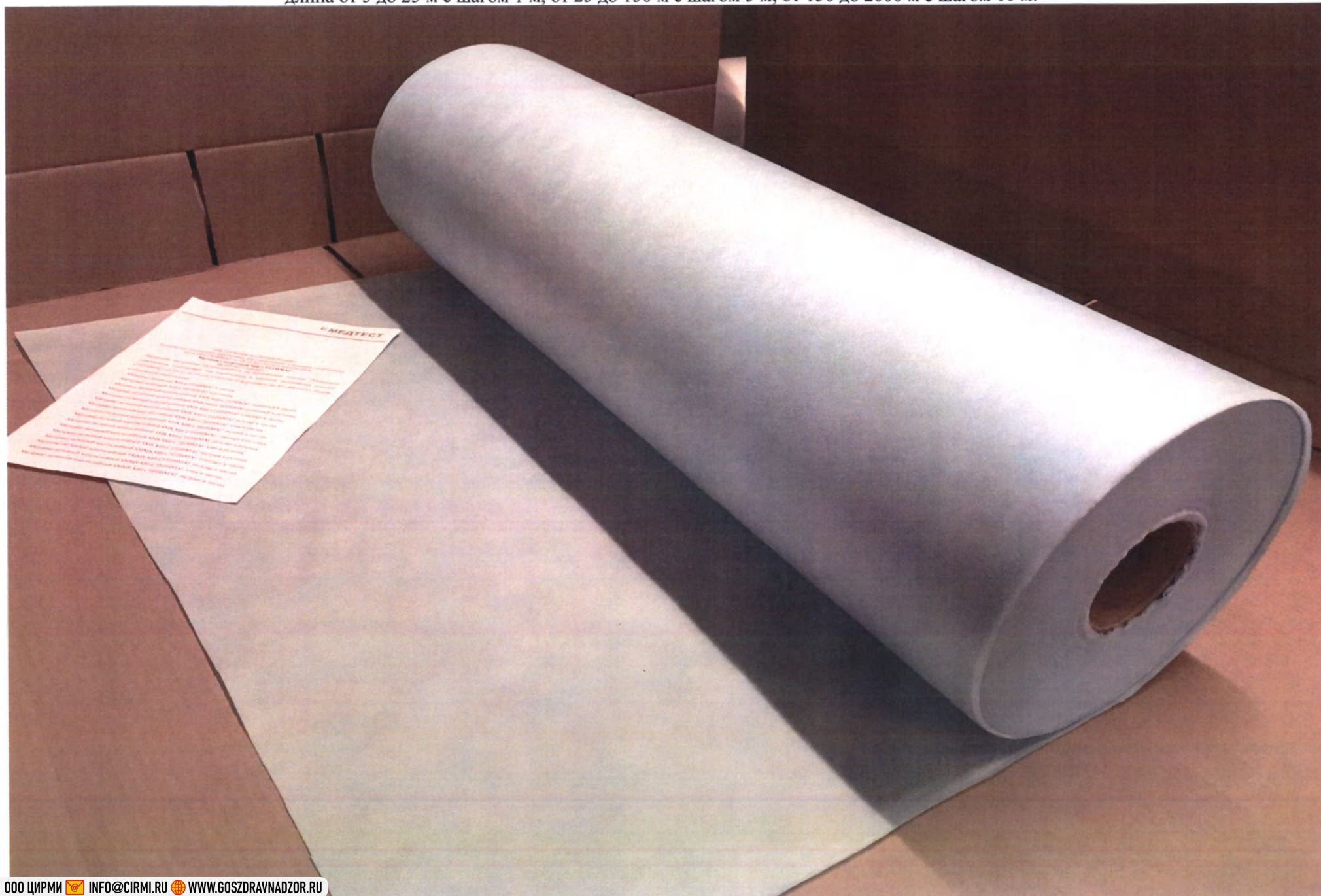

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

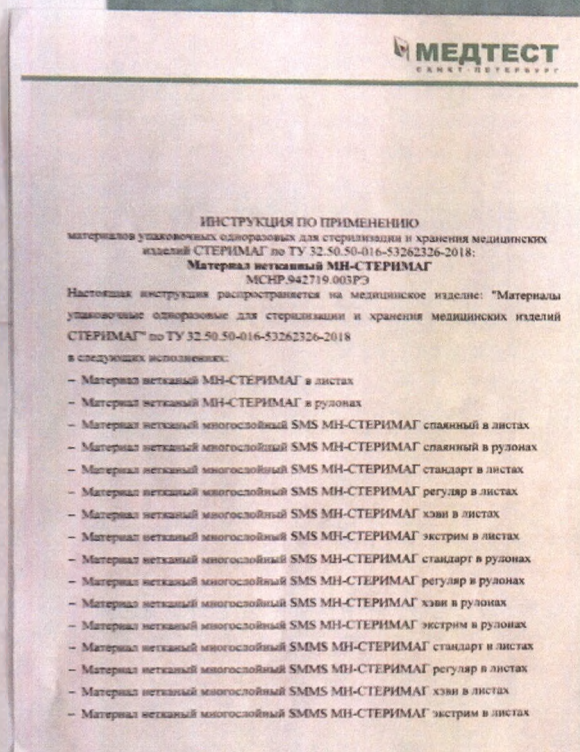

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ х/ви в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ™ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018: Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ

МСИР-942719.003Р3

Настоящая инструкция распространяется на медицинские изделия: "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ™ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 производства в следующих исполнениях:

- Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в листах
- Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018;

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

Настоящая инструкция распространяется на медицинское изделие: "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ™ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 производства

в следующих исполнениях:

- Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах
- Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спайный в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спайный в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ эски в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ эскизм в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ эски в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ эскизм в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ эски в листах
- Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ эскизм в листах

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спянный);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регуляр);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ хэви в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

 **МЕДТЕСТ**
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018;
Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.001РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.

Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем MH-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS MH-СТЕРИМАГ спаянный);

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS MH-СТЕРИМАГ регулар);

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS MH-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем MH-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем MH-СТЕРИМАГ SMMS регулар);


Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем MH-СТЕРИМАГ SMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем MH-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMS MH-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

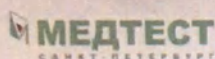

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулярь)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регулярь);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);


Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах


Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

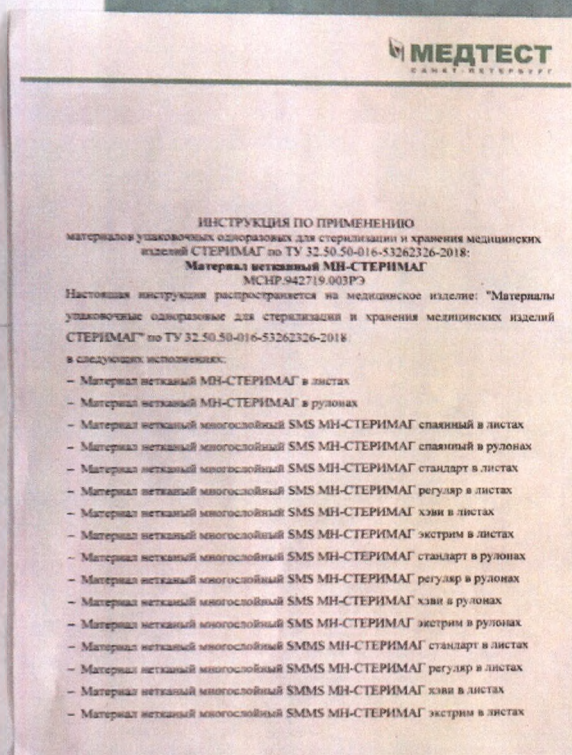

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регуляг в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

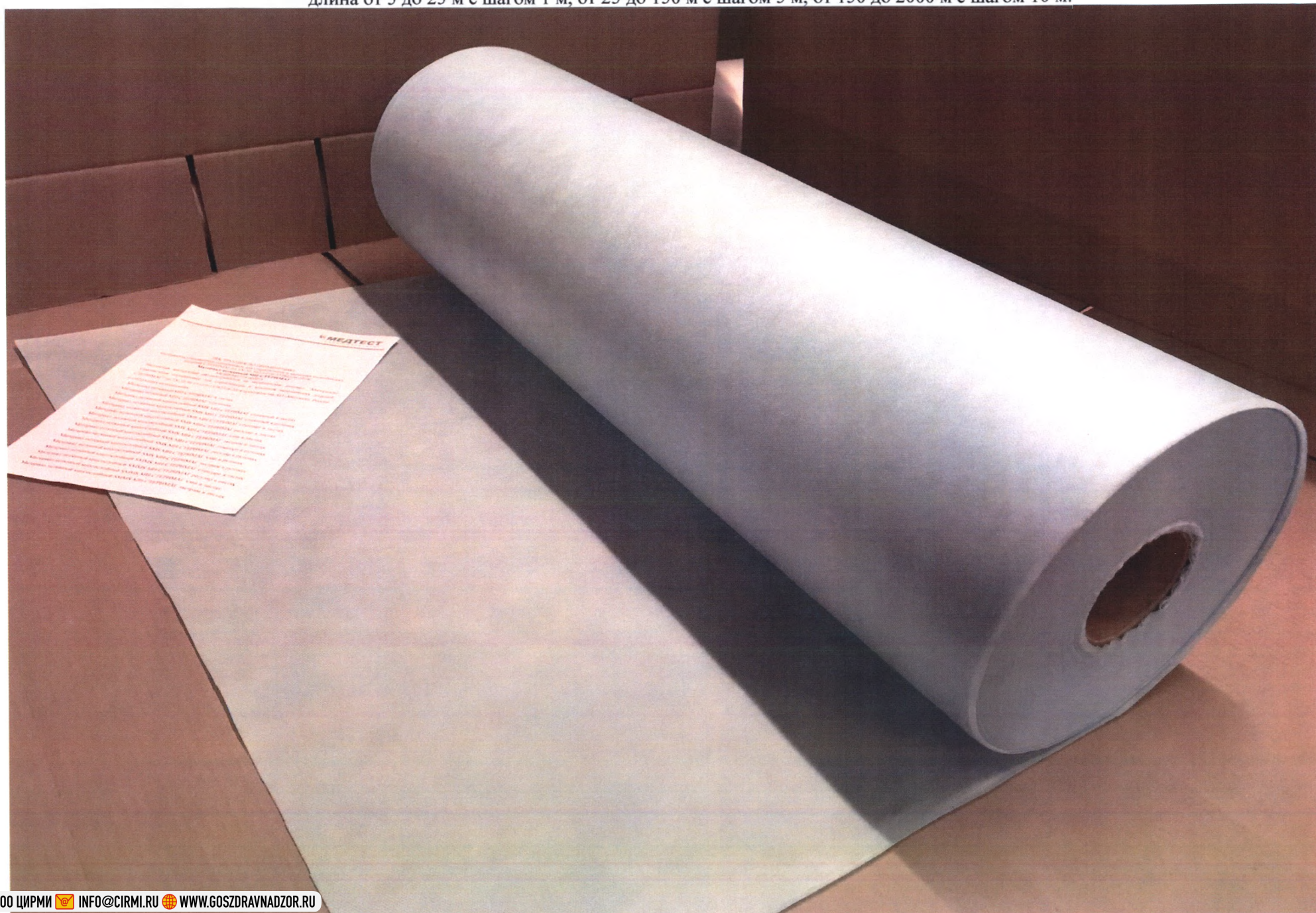

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ хэви в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 600 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ™ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018
Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ
МСИР 942719.003Р3

Настоящая инструкция распространяется на медицинское изделие: "Материалы
упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий
СТЕРИМАГ™ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018

в следующих исполнениях:

- Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в листах
- Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ спайный в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ спайный в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ хэви в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регулар в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ хэви в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ хэви в листах
- Материал нетканый многослойный SMMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

МЕДТЕСТ
СННТ МЕДТЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);


Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

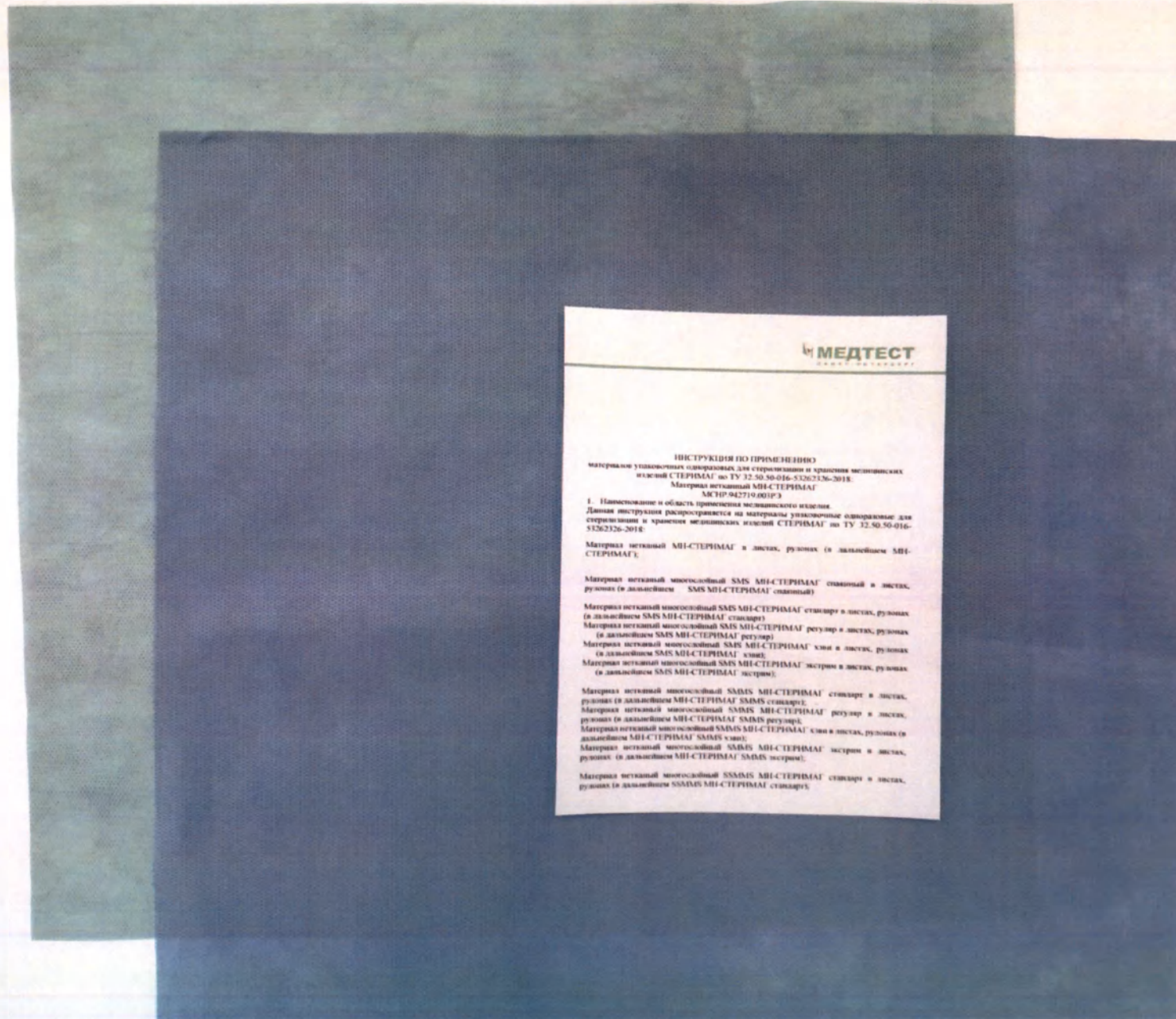

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

МЕДТЕСТ
КАНАЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018: Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ

МСИР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018.

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулярь);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS регулярь);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 1000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);


Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

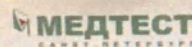

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018. Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ МСНР.942719.003РЗ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SSMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003РЭ

Настоящая инструкция распространяется на медицинское изделие: "Материалы
упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий
СТЕРИМАГ" по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:


в следующих исполнениях:

- Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах
- Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спальный в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спальный в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах
- Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS MH-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах


Типоразмеры: ширина от 275 до 600 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 5 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

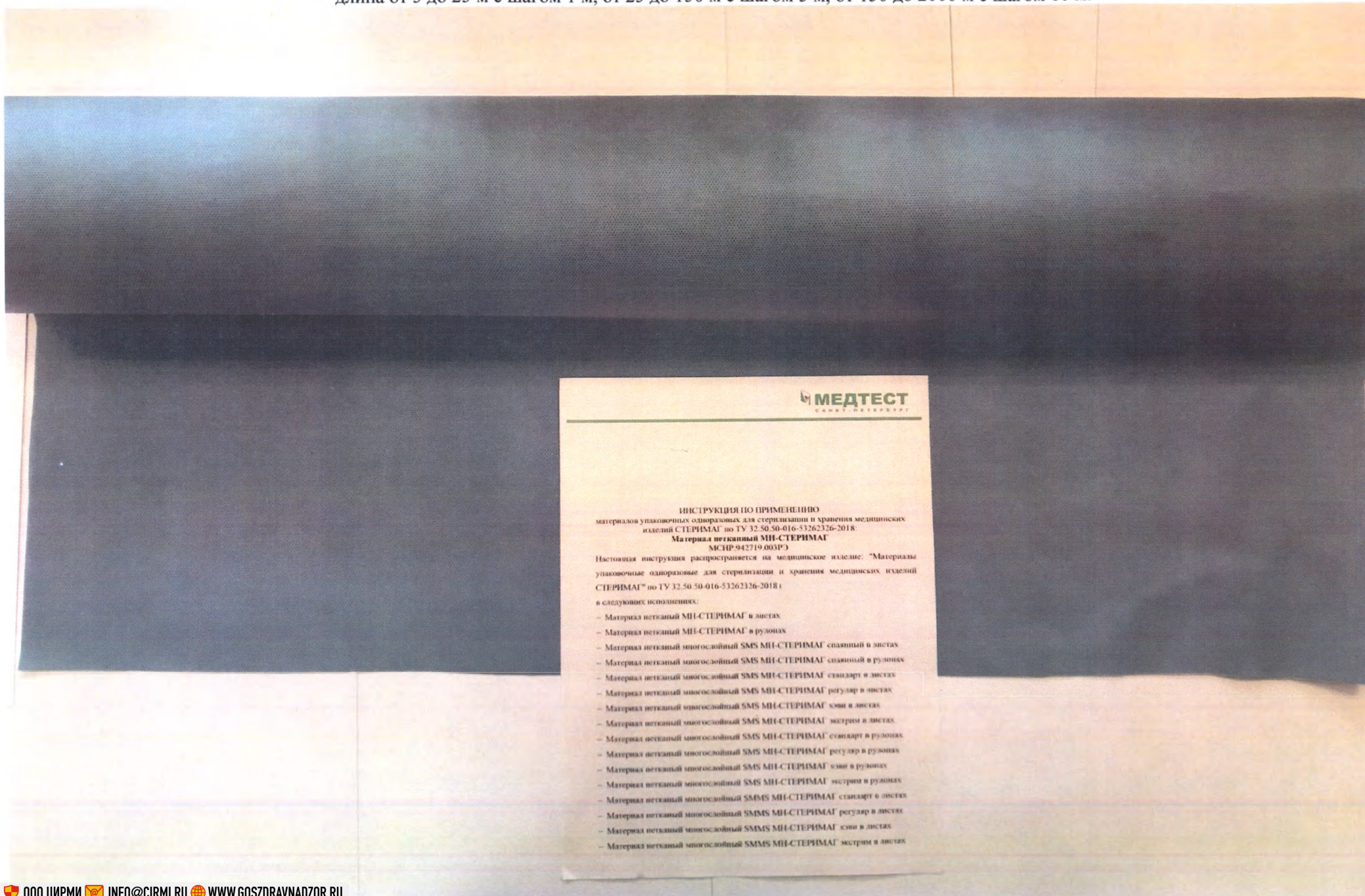

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

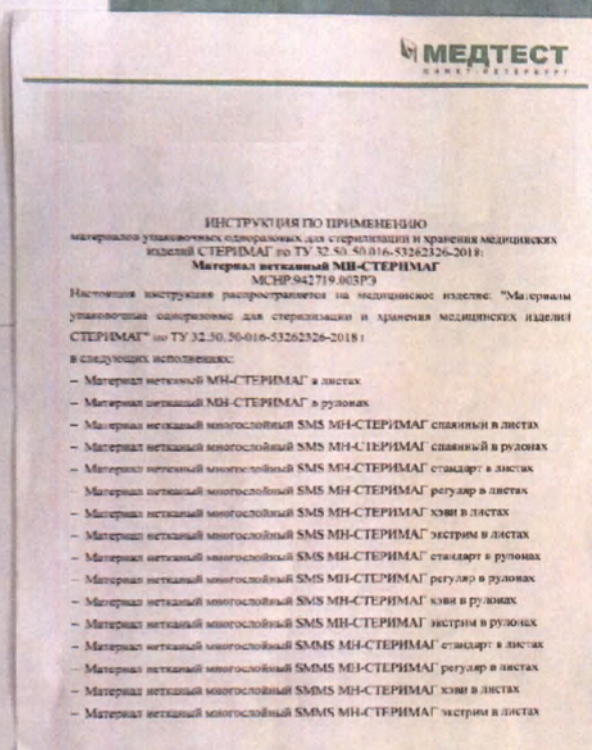

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

МЕДТЕСТ
КАБЕТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

МЕДТЕСТ
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных озоноразрывных для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные озоноразрывные для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018.

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви).

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим).

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS стандарт).

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS регулар).

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS хэви).


Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS экстрим).

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт).

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

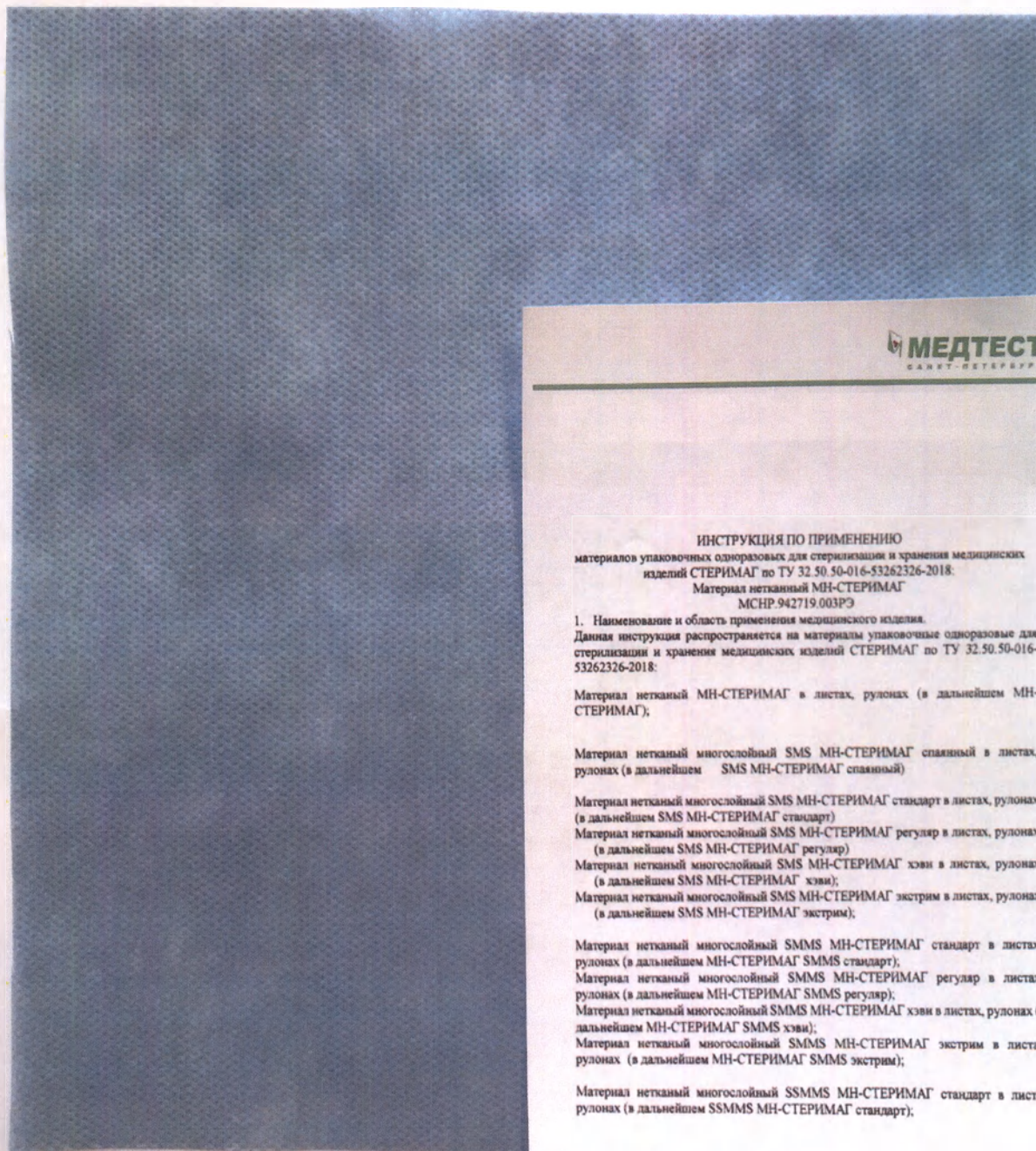

МЕДТЕСТ
КАРЕНТ - ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регуляр);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003РЗ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS хэви);


Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

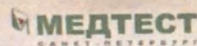

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный)

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);
Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS хэви);


Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМА стандарт в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

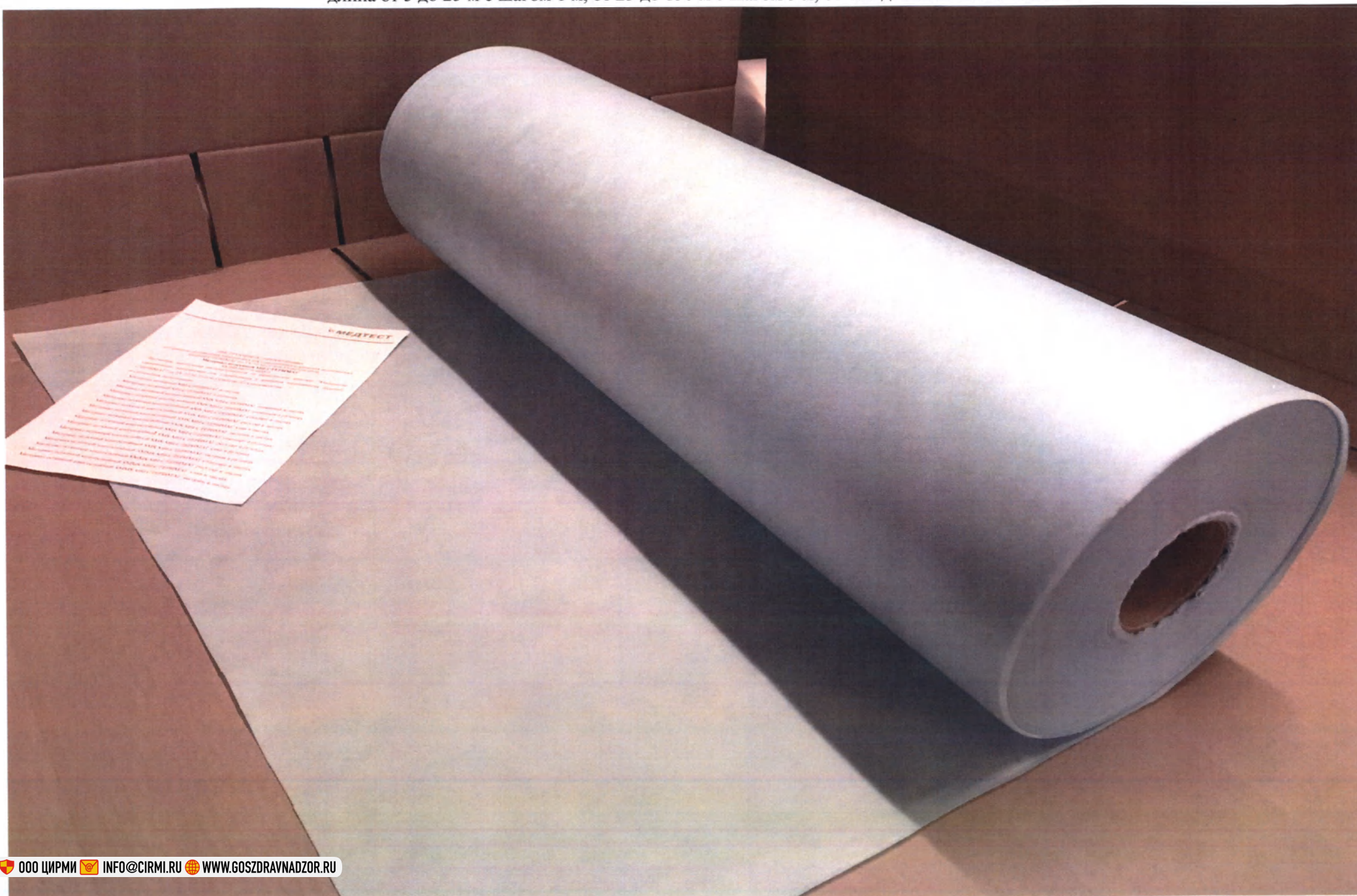

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS MH-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм;
длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50.016-53262326-2018
Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ
МСНР 942719.003Р

Настоящая инструкция распространяется на медицинское изделие: "Материалы
упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий
СТЕРИМАГ" по ТУ 32.50.50.016-53262326-2018
в следующих исполнениях:

- Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в листах
- Материал нетканый MH-СТЕРИМАГ в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ спайный в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ спайный в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регуляр в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах
- Материал нетканый многослойный SMMMS MH-СТЕРИМАГ стандарт в листах
- Материал нетканый многослойный SMMMS MH-СТЕРИМАГ регуляр в листах
- Материал нетканый многослойный SMMMS MH-СТЕРИМАГ экстрим в листах

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

МЕДТЕСТ
СЕРТИФИКАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ
МСНР.942719.003РЭ

1. Назначение и область применения медицинского изделия.
Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-
СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спандекс в листах,
рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спандекс);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах
(в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в
дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS хэви);

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах,
рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах,
рулонах (в дальнейшем SSMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ

МСНР 942719.003РЗ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ регулар);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ хэви);

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS стандарт);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регулар в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS регулар);

Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS хэви);


Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах, рулонах (в дальнейшем МН-СТЕРИМАГ SMMS экстрим);

Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах, рулонах (в дальнейшем SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт);

Фотографическое изображение

Комбинированный комплект из 2-х материалов: первый материал-бумага крепированная стандартная; второй материал-крафт-бумага

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.

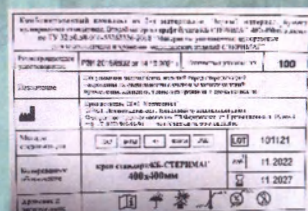**МЕДТЕС**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
интеркастер универсальных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.59-014-5326.1326-2018

051121 AQ 11.2026

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСП-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



РУ № РЗН 2019/8832 от 14.10.2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Пакеты комбинированные

а) самоклеящиеся ПСП-СТЕРИМАГ, ПСС-СТЕРИМАГ

материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий

ПСП-СТЕРИМАГ м 5 мм; длина от 30 до

со складкой ПСС-

м 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; или усиленный ПСПу-

м 5 мм; длина от 30 до

складкой усиленный

м 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; или - пакеты).

(елия (назначение), ишем - МИ) перед с учетом заданных ния и срока годности, ского изделия.

акеты. кные пакеты. ным сроком годности. ного раза.

и по применению, хранения - побочные

изделия.

технических условий ебования ГОСТ ISO

с применением описи

х изделий в упаковке годности изделия.

рной классификацией

собой прямоугольные ов специальных бумаг ной пленки (прозрачная без складок, так и со диненные между собой ующей маркировкой, а ими первого класса или

без них. Уголки пакетов могут быть дополнительно запаяны для предотвращения скрепления в них пыли.


4.7. Варианты типоразмеров пакетов: ширина (30+1000) мм, шаг 5мм, длина (30+1000) мм, шаг 5 мм, у пакетов со складкой: высота складки (20+1000) мм, шаг 5мм.

4.8. Пакеты ПСП-СТЕРИМАГ, ПСС-СТЕРИМАГ изготовлены из бумаги и полимерной пленки, пакеты ПСПу-СТЕРИМАГ, ПССу-СТЕРИМАГ изготовлены из особой бумаги повышенной прочности с дополнительными защитными свойствами и полимерной пленки.

4.9. Все виды бумаг, используемые для производства пакетов, изготовлены из особо чистой целлюлозы, обладающей барьерными свойствами, обработаны

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСП-СТЕРИМАГ 100 x 200 мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"		Количество в упаковке, шт.	100
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.		
Назначение	Пакет для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией. Предназначен для стерилизации изделий с учетом формы и срока годности. Изготовлен из бумаги и полимерной пленки, прошедших обработку паром.		
Производитель	ООО "Медтест" (Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 1, лит. А, этаж 1, телефон: +7 (812) 508-88-50)		
Методы стерилизации	Пастеризация, автоклавирование, окислительная стерилизация		
Материал	Бумага, полимерная пленка		
Классификация	ПСП-СТЕРИМАГ 100 x 200 мм		
Срок годности	5 лет		
Лот	060522		
Дата	05.2022		
Срок годности	05.2027		


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

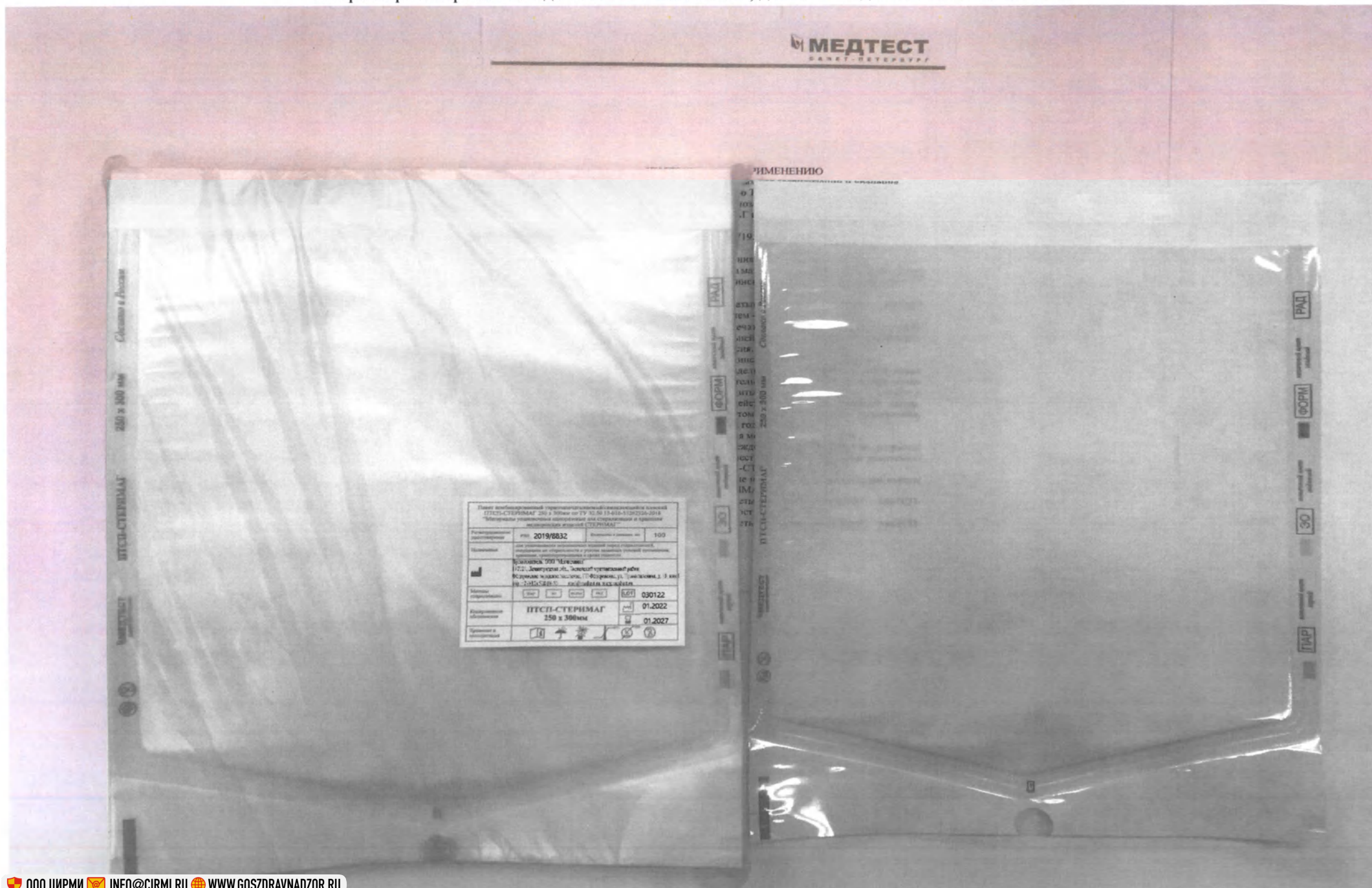

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный самоклеящийся со складкой ПСС-ТЕРИМАГ


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм

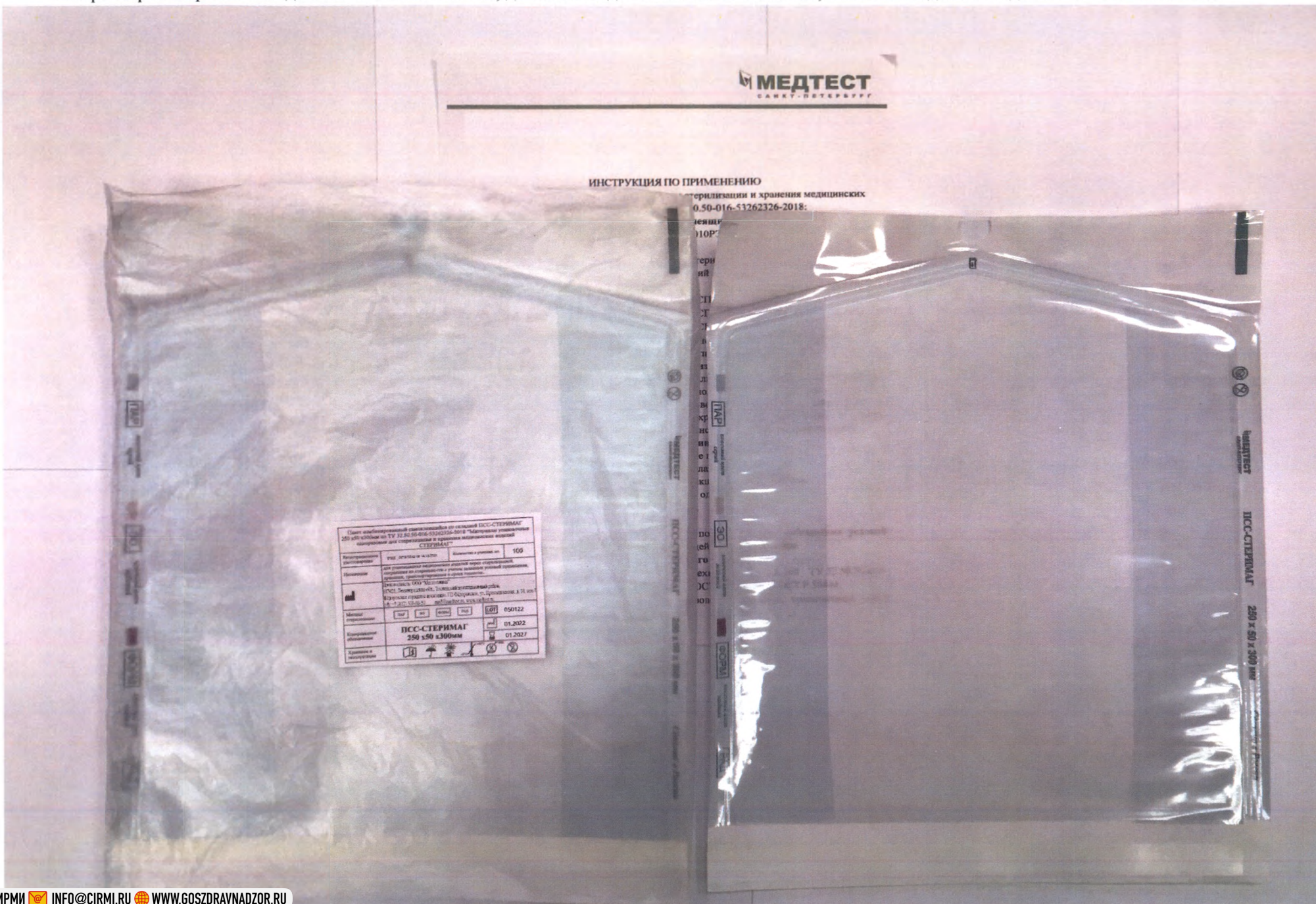


Фотографическое изображение

Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся со складкой ПТСС-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

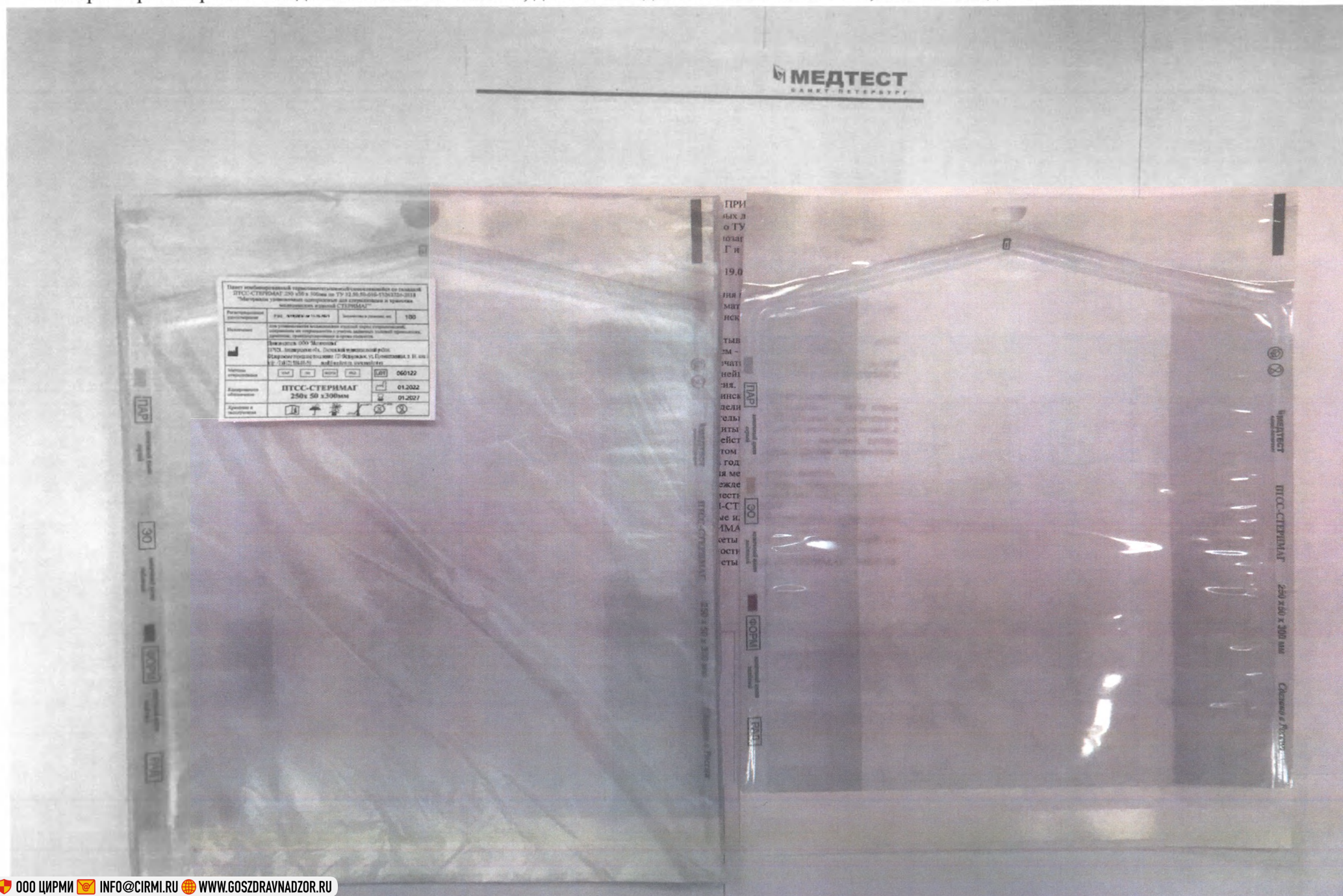

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

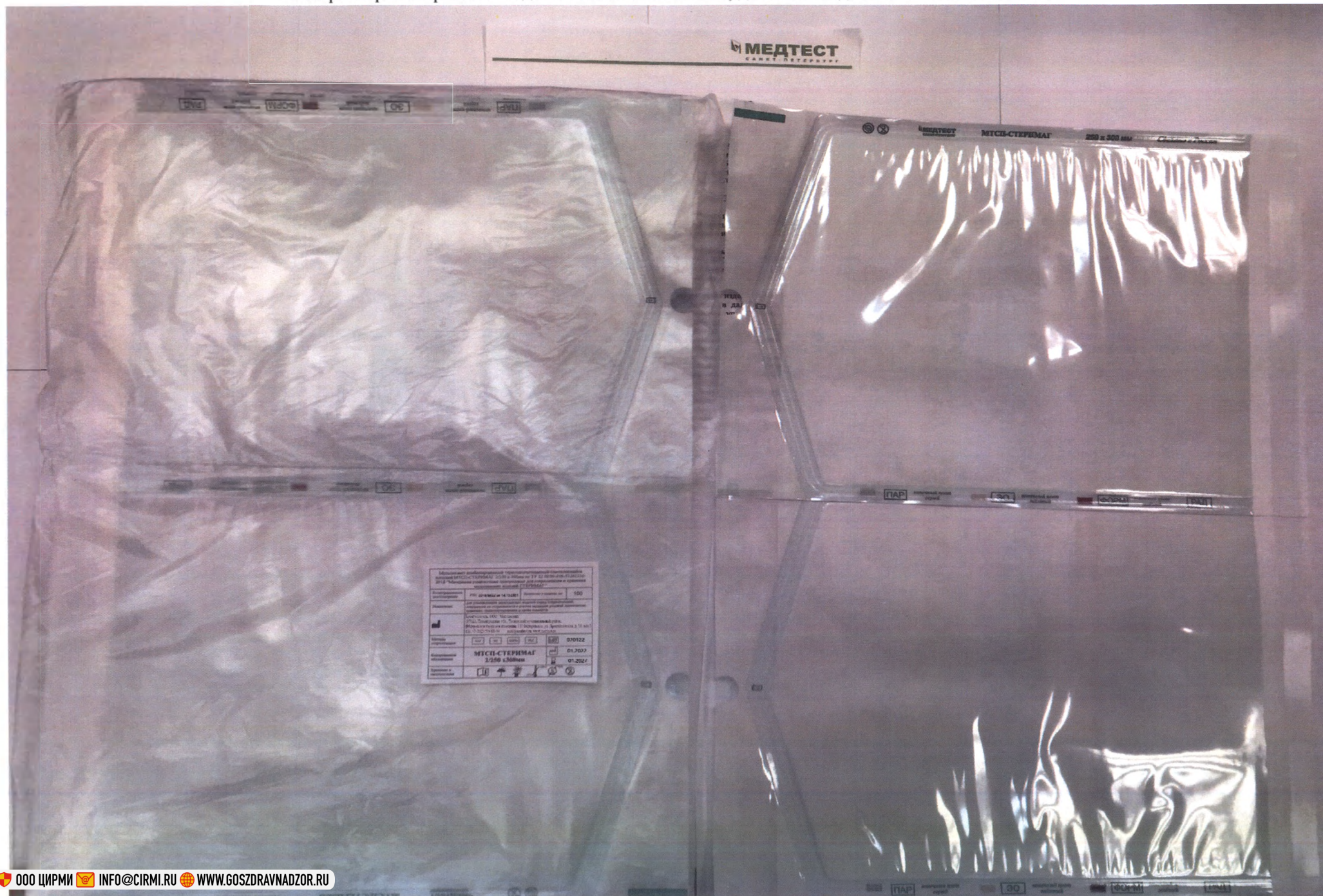

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский усиленный ПТПу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ПО ПРИМЕНЕНИЮ

11/1/19

30

1

⑤ ⑥

BluePrint

ИТЛУ-СТЕРИМА

250 x 300 mm


Сбербанк России

Полное наименование изделия: **ПЭУ-СТЕРИМАГ 250 x 300мм**
 Изд. №: **72.35.16-10.30.2018** **Материалы** **Упаковки** **Содержание** **Срок годности**
 для стерилизации и хранения медицинских изделий: **СТЕРИМАГ**

Регистрационный номер	РВИ 2012/06.04.1447.2012	Возрастная категория	100
Назначение	Для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией и хранения. Предназначен для упаковки медицинских изделий из пластика, нержавеющей стали и других металлов. Упаковочный блок ПЭУ-СТЕРИМАГ 250x300мм 1) 250x300 мм, 2) 250x300 мм, 3) 250x300 мм, 4) 250x300 мм, 5) 250x300 мм, 6) 250x300 мм, 7) 250x300 мм, 8) 250x300 мм, 9) 250x300 мм, 10) 250x300 мм, 11) 250x300 мм, 12) 250x300 мм, 13) 250x300 мм, 14) 250x300 мм, 15) 250x300 мм, 16) 250x300 мм, 17) 250x300 мм, 18) 250x300 мм, 19) 250x300 мм, 20) 250x300 мм, 21) 250x300 мм, 22) 250x300 мм, 23) 250x300 мм, 24) 250x300 мм, 25) 250x300 мм, 26) 250x300 мм, 27) 250x300 мм, 28) 250x300 мм, 29) 250x300 мм, 30) 250x300 мм, 31) 250x300 мм, 32) 250x300 мм, 33) 250x300 мм, 34) 250x300 мм, 35) 250x300 мм, 36) 250x300 мм, 37) 250x300 мм, 38) 250x300 мм, 39) 250x300 мм, 40) 250x300 мм, 41) 250x300 мм, 42) 250x300 мм, 43) 250x300 мм, 44) 250x300 мм, 45) 250x300 мм, 46) 250x300 мм, 47) 250x300 мм, 48) 250x300 мм, 49) 250x300 мм, 50) 250x300 мм, 51) 250x300 мм, 52) 250x300 мм, 53) 250x300 мм, 54) 250x300 мм, 55) 250x300 мм, 56) 250x300 мм, 57) 250x300 мм, 58) 250x300 мм, 59) 250x300 мм, 60) 250x300 мм, 61) 250x300 мм, 62) 250x300 мм, 63) 250x300 мм, 64) 250x300 мм, 65) 250x300 мм, 66) 250x300 мм, 67) 250x300 мм, 68) 250x300 мм, 69) 250x300 мм, 70) 250x300 мм, 71) 250x300 мм, 72) 250x300 мм, 73) 250x300 мм, 74) 250x300 мм, 75) 250x300 мм, 76) 250x300 мм, 77) 250x300 мм, 78) 250x300 мм, 79) 250x300 мм, 80) 250x300 мм, 81) 250x300 мм, 82) 250x300 мм, 83) 250x300 мм, 84) 250x300 мм, 85) 250x300 мм, 86) 250x300 мм, 87) 250x300 мм, 88) 250x300 мм, 89) 250x300 мм, 90) 250x300 мм, 91) 250x300 мм, 92) 250x300 мм, 93) 250x300 мм, 94) 250x300 мм, 95) 250x300 мм, 96) 250x300 мм, 97) 250x300 мм, 98) 250x300 мм, 99) 250x300 мм, 100) 250x300 мм, 101) 250x300 мм, 102) 250x300 мм, 103) 250x300 мм, 104) 250x300 мм, 105) 250x300 мм, 106) 250x300 мм, 107) 250x300 мм, 108) 250x300 мм, 109) 250x300 мм, 110) 250x300 мм, 111) 250x300 мм, 112) 250x300 мм, 113) 250x300 мм, 114) 250x300 мм, 115) 250x300 мм, 116) 250x300 мм, 117) 250x300 мм, 118) 250x300 мм, 119) 250x300 мм, 120) 250x300 мм, 121) 250x300 мм, 122) 250x300 мм, 123) 250x300 мм, 124) 250x300 мм, 125) 250x300 мм, 126) 250x300 мм, 127) 250x300 мм, 128) 250x300 мм, 129) 250x300 мм, 130) 250x300 мм, 131) 250x300 мм, 132) 250x300 мм, 133) 250x300 мм, 134) 250x300 мм, 135) 250x300 мм, 136) 250x300 мм, 137) 250x300 мм, 138) 250x300 мм, 139) 250x300 мм, 140) 250x300 мм, 141) 250x300 мм, 142) 250x300 мм, 143) 250x300 мм, 144) 250x300 мм, 145) 250x300 мм, 146) 250x300 мм, 147) 250x300 мм, 148) 250x300 мм, 149) 250x300 мм, 150) 250x300 мм, 151) 250x300 мм, 152) 250x300 мм, 153) 250x300 мм, 154) 250x300 мм, 155) 250x300 мм, 156) 250x300 мм, 157) 250x300 мм, 158) 250x300 мм, 159) 250x300 мм, 160) 250x300 мм, 161) 250x300 мм, 162) 250x300 мм, 163) 250x300 мм, 164) 250x300 мм, 165) 250x300 мм, 166) 250x300 мм, 167) 250x300 мм, 168) 250x300 мм, 169) 250x300 мм, 170) 250x300 мм, 171) 250x300 мм, 172) 250x300 мм, 173) 250x300 мм, 174) 250x300 мм, 175) 250x300 мм, 176) 250x300 мм, 177) 250x300 мм, 178) 250x300 мм, 179) 250x300 мм, 180) 250x300 мм, 181) 250x300 мм, 182) 250x300 мм, 183) 250x300 мм, 184) 250x300 мм, 185) 250x300 мм, 186) 250x300 мм, 187) 250x300 мм, 188) 250x300 мм, 189) 250x300 мм, 190) 250x300 мм, 191) 250x300 мм, 192) 250x300 мм, 193) 250x300 мм, 194) 250x300 мм, 195) 250x300 мм, 196) 250x300 мм, 197) 250x300 мм, 198) 250x300 мм, 199) 250x300 мм, 200) 250x300 мм, 201) 250x300 мм, 202) 250x300 мм, 203) 250x300 мм, 204) 250x300 мм, 205) 250x300 мм, 206) 250x300 мм, 207) 250x300 мм, 208) 250x300 мм, 209) 250x300 мм, 210) 250x300 мм, 211) 250x300 мм, 212) 250x300 мм, 213) 250x300 мм, 214) 250x300 мм, 215) 250x300 мм, 216) 250x300 мм, 217) 250x300 мм, 218) 250x300 мм, 219) 250x300 мм, 220) 250x300 мм, 221) 250x300 мм, 222) 250x300 мм, 223) 250x300 мм, 224) 250x300 мм, 225) 250x300 мм, 226) 250x300 мм, 227) 250x300 мм, 228) 250x300 мм, 229) 250x300 мм, 230) 250x300 мм, 231) 250x300 мм, 232) 250x300 мм, 233) 250x300 мм, 234) 250x300 мм, 235) 250x300 мм, 236) 250x300 мм, 237) 250x300 мм, 238) 250x300 мм, 239) 250x300 мм, 240) 250x300 мм, 241) 250x300 мм, 242) 250x300 мм, 243) 250x300 мм, 244) 250x300 мм, 245) 250x300 мм, 246) 250x300 мм, 247) 250x300 мм, 248) 250x300 мм, 249) 250x300 мм, 250) 250x300 мм, 251) 250x300 мм, 252) 250x300 мм, 253) 250x300 мм, 254) 250x300 мм, 255) 250x300 мм, 256) 250x300 мм, 257) 250x300 мм, 258) 250x300 мм, 259) 250x300 мм, 260) 250x300 мм, 261) 250x30		

Фотографическое изображение


Пакет комбинированный самоклеящийся плоский усиленный ПЭПУ-СТЕРИМАГ
Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

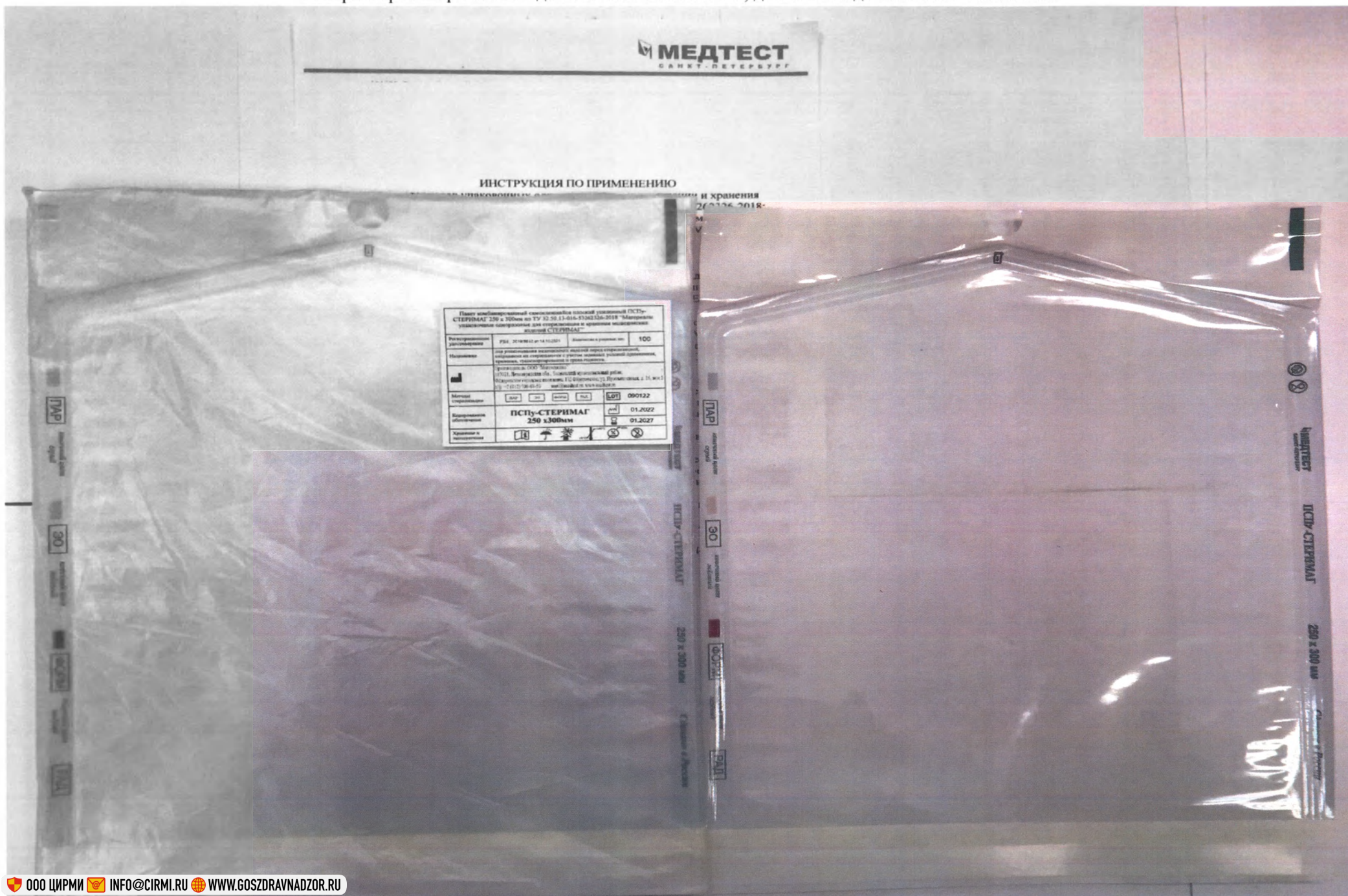

Фотографическое изображение


Пакет комбинированный термопечатаемый/самоклеящийся плоский усиленный ПТСПу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

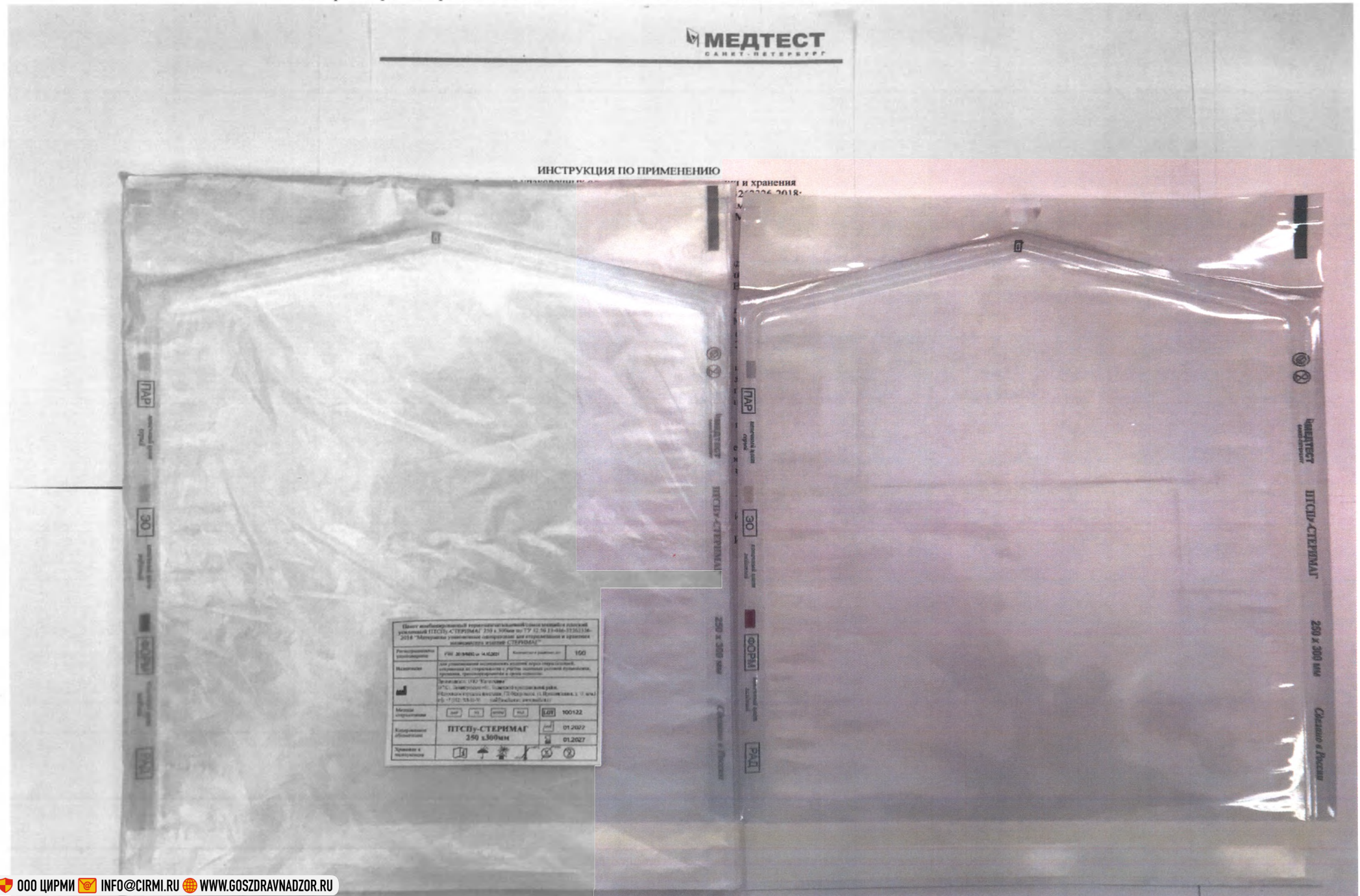

Пакет комбинированный со складкой усиленный ПТСу-СТЕРИМАГ


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

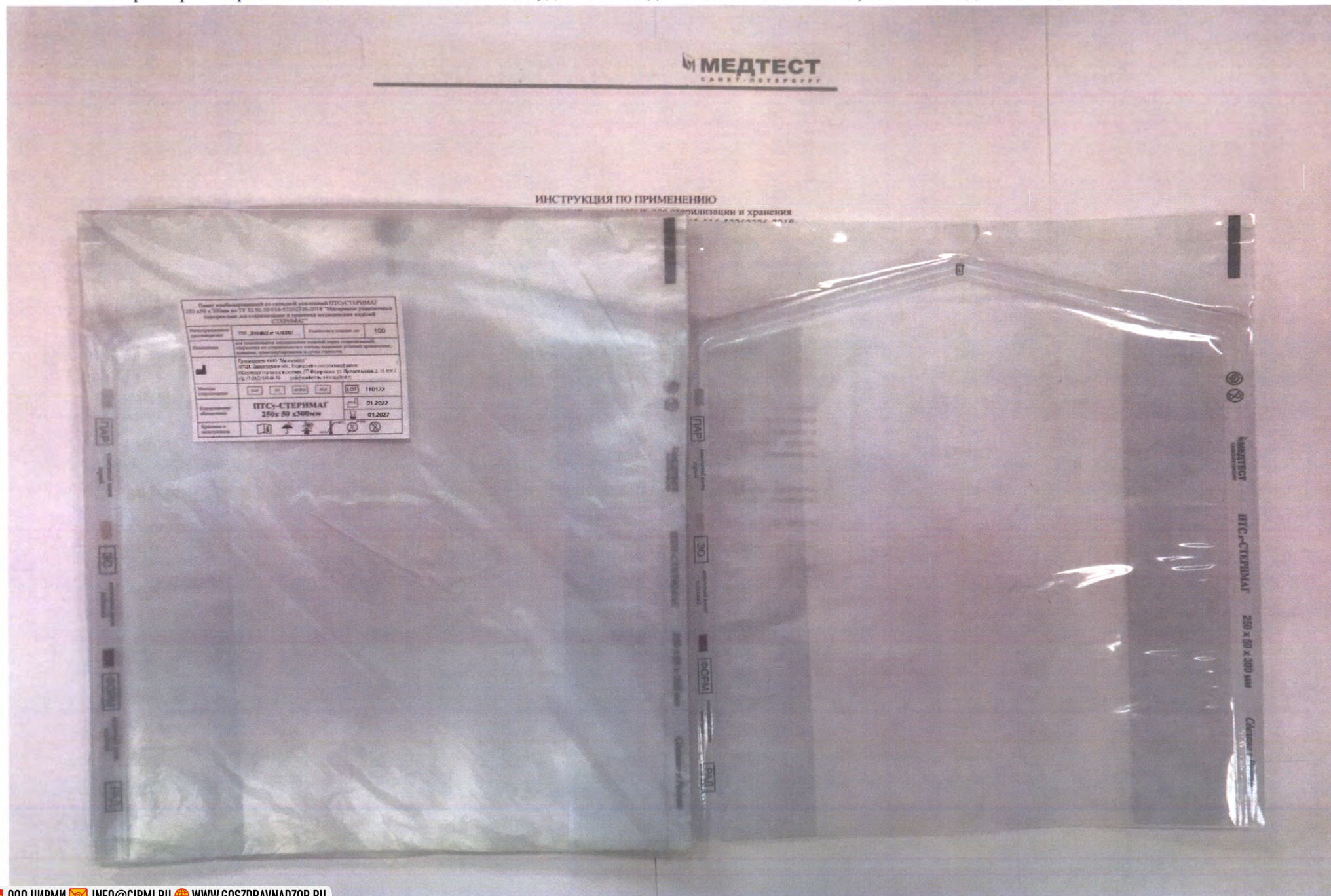

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный самоклеющийся со складкой усиленный ПССу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

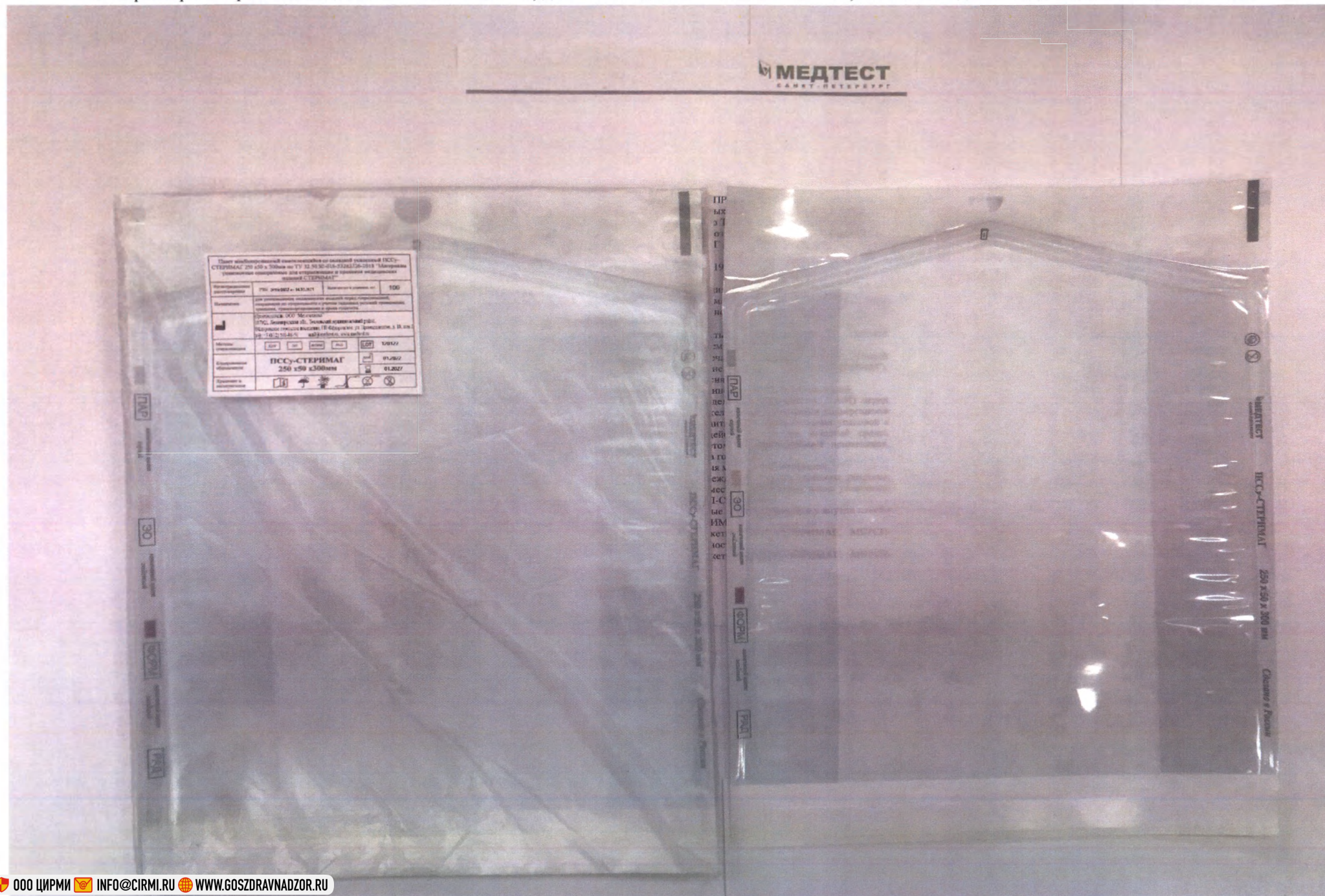

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный термозатвердевающий/самоклеющийся со складкой, усиленный ПТССу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

Пакет комбинированный термозатвердевающий/самоклеющийся со складкой усиленный ПТССу-СТЕРИМАГ 250х50 x 100мм от ТУ 12.10.35-011-200230-014 "Материалы упаковочные комбинированные для стерилизации и транспортировки медицинских изделий ПТССу-СТЕРИМАГ"	
Регистрационный номер	РД 018452 и 018453
Количество изделий шт	100
Примечание	Для упаковки комбинированных изделий термозатвердевающих/самоклеющихся со складкой усиленных ПТССу-СТЕРИМАГ, предназначенных для стерилизации и транспортировки медицинских изделий. Материал, соответствующий требованиям стандарта.
Изготовитель	ООО "Вектор"
Адрес	190000, Санкт-Петербург, ул. Бухаркина, д. 10, к. 1
Телефон	8 (812) 780-0000
Место изготовления	190000, Санкт-Петербург, ул. Бухаркина, д. 10, к. 1
Материал	ПТССу-СТЕРИМАГ 250х50 x 300мм
Объем	01.2002
Дата	01.2007
Срок годности	18 мес.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский ПТПВ-СТЕРИМАГ


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий

ПТТПВ-СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

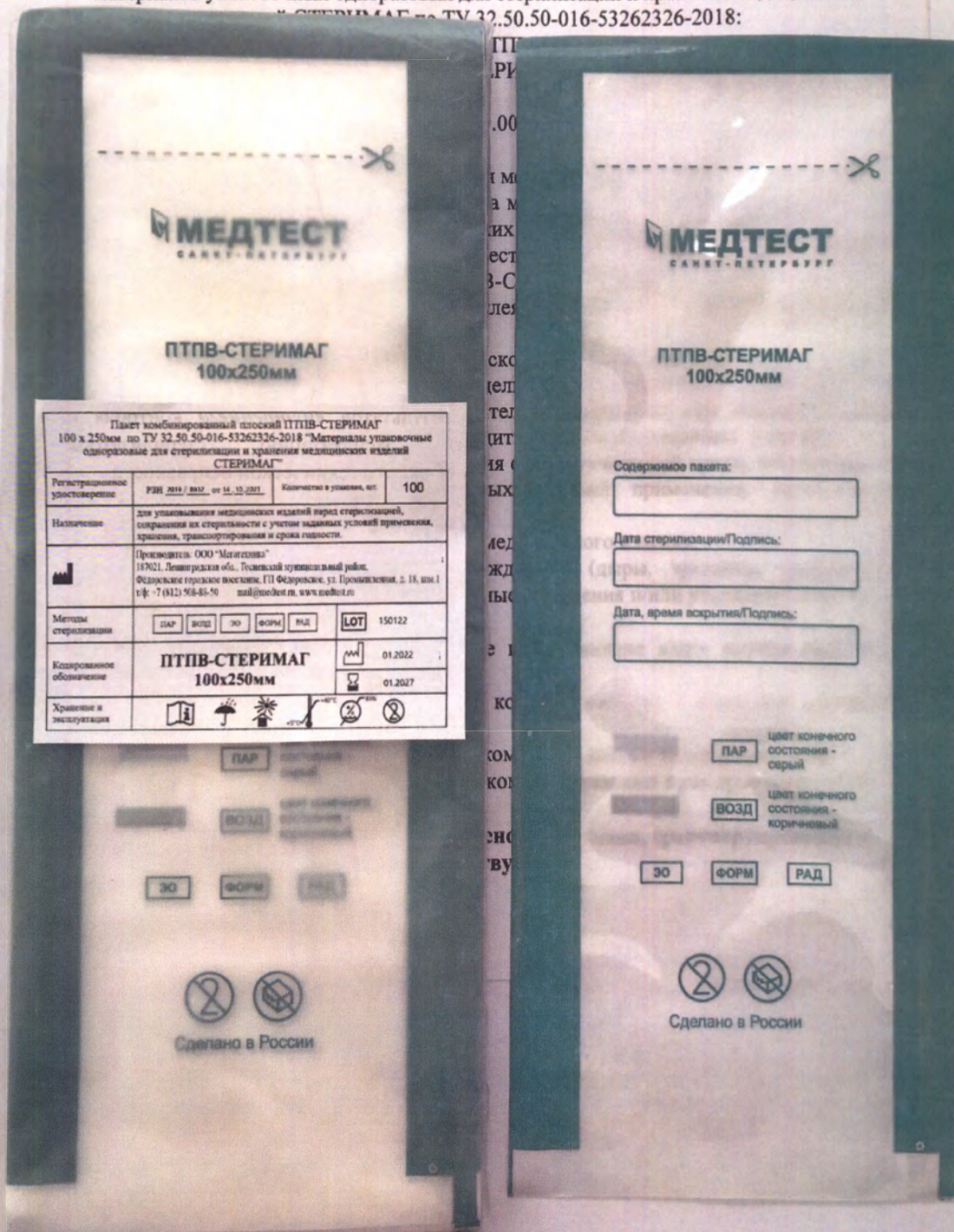


Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский ПТПВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

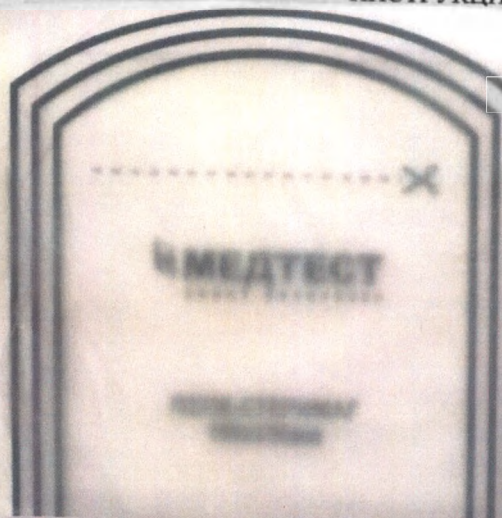

Пакет комбинированный плоский ПТПВ-СТЕРИМАГ 100 x 250мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"	
Регистрационное устройство	РЭН 2019 / 022 от 14.12.2019
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий хранения, транспортирования и срока годности.
Производитель	Производитель: ООО "Медтест" 187021, Ленинградской обл., Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, пом. 1 т/ф: +7 (812) 908-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД LOT 150122
Комбинированное обозначение	ПТПВ-СТЕРИМАГ 100x250мм 01.2022 01.2027
Хранение и эксплуатация	Иконки: книга, зонтик, солнце, термометр, часы, запрет огня, запрет воды



Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый


ЭО ФОРМ РАД

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСПВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

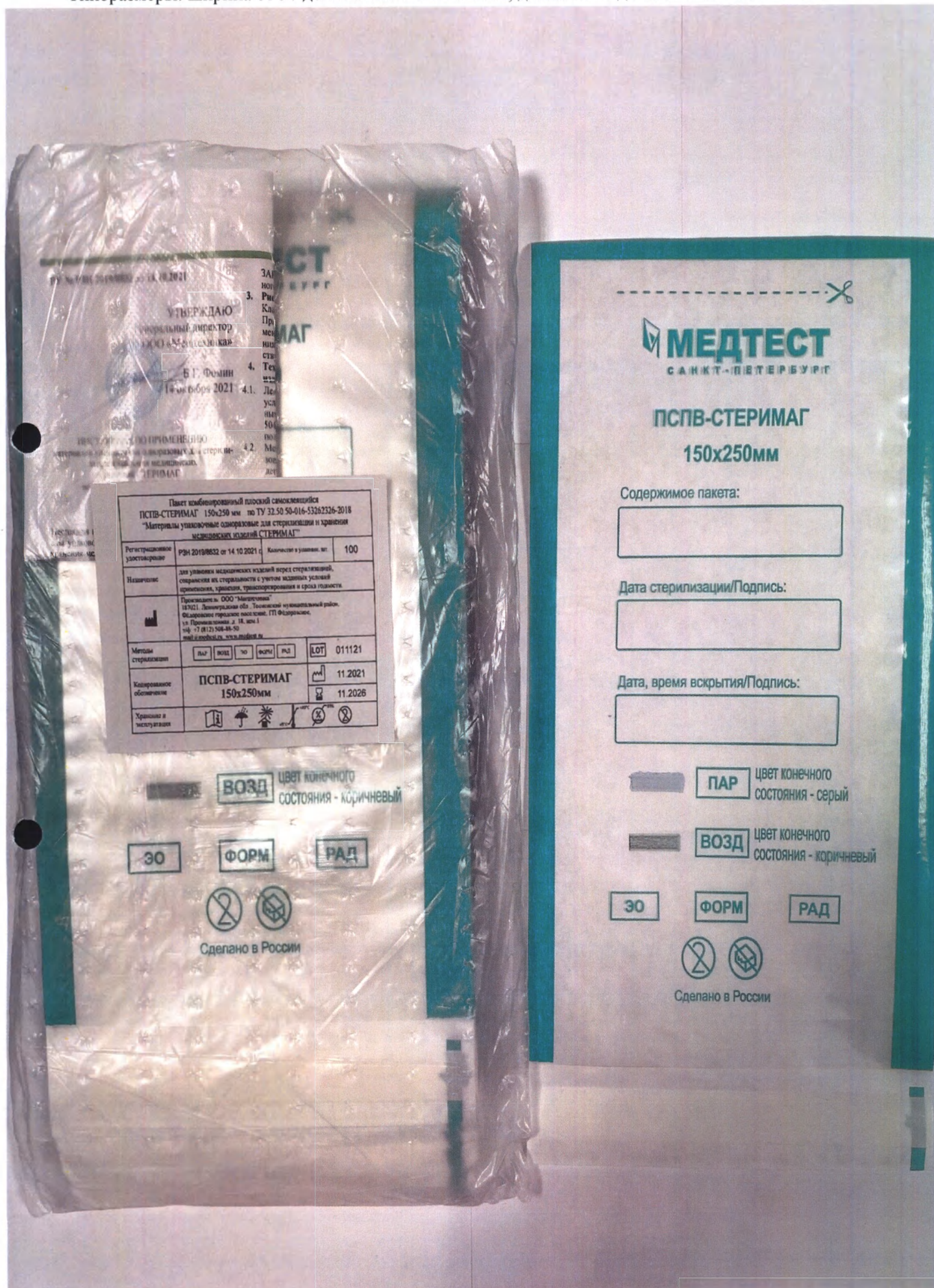

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСПВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



СТРУКТУРА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

их для стерилизации и хранения медицинских

50.50-016-53262326-2018:

ПВ-СТЕРИМАГ и самоклеящихся

ИН

061

мед

ма

х и

СТР

СТ

еяш

сог

лий

элы

ты

фа

х

ДИ

ден

те у

ил

ОМ

МБ


МБ

Ю В

ую



Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСПВ-СТЕРИМАГ 100 x 250мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН_2014_ВМД_от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сопровождая их стерильности в условиях вынужденной перевозки, хранения, транспортирования и срока годности.		
Изготовитель	Предприятие: ООО "Медтест" 137021, Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 13, км.1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД	LOT	011121
Кодированное обозначение	ПСПВ-СТЕРИМАГ 100 x 250мм		11.2021
Хранение и транспортировка	11.2021		

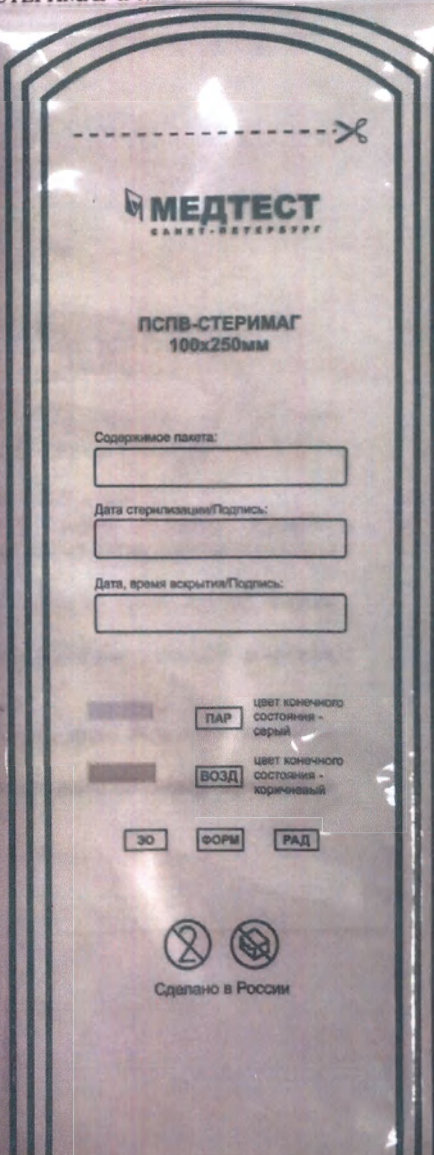

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО ФОРМ РАД



Сделано в России

РУ № РЗН 2019/

ИН
материалов у
хранен
по
Рулоны

Настоящая инстру
одномерные для ет
по ТУ 32.50.50-016-5

- Рулон комбини
Типоразмеры: ш
м с шагом 1 м;
- Рулон комбини
Типоразмеры: ш
м с шагом 1 м, в
- Рулон комбини
Типоразмеры: ш
м с шагом 1 м, в
- Рулон комбини
Типоразмеры: ш
м с шагом 1 м, в

1. Показания для
Для упаковки
стерилизации, с

2. Противопоказ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

3. Риск примен
Класс потенциал
При использо
условий транспо

4. Технические ха
4.1 Рулоны соответ
016-53262326-20
50444.

4.2 Методы стерил
формальдегида).

4.3 Срок сохране
стерилизации—

4.4 Вид издани
медицинских из

4.5 ОКПД2 32.50.50

4.6 Рулоны комби
рукава из разл
прозрачной пол
как без складок
соединенные на
рукава нанес
индикаторами и

МЕД
САН

4.7. Варианты типоразм
длина (1000*2000
(РКПСЭ-СТЕРИ
(20*1000) м

4.8. Рулоны
СТЕРИ
РКПСЭ-СТЕРИ
и

изации и
АГ

са)

упа
СТЕРИ

на от

а т

И

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

- 5.3. Транспортная маркировка:
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-97, в которой должны быть указаны наименование, адрес грузоотправителя и грузополучателя, а также транспортная тары. На транспортной таре должны быть указаны манипуляционные знаки "Беречь от влаги", "Хрупко".
Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.
6. Комплектность.
В один комплект поставки входит от 1 до 20 рулонов и инструкция по применению.
7. Упаковка.
7.1. Рулоны упаковывают в групповую упаковку от 1 до 20 штук в пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302 или оборачивают полимерной пленкой по ГОСТ 10354 и заклеивают клеевой лентой по ГОСТ 18251 или запечатывают термосвариванием.

Рулон комбинированный плоский РКПС-СТЕРИМАГ 50мм x 200м
по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одномерные для
стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"

Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке, шт.	1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий хранения, транспортирования и срока годности		
Производитель	Производитель: ООО "МедТест", 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50, mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР	30	ФОРМ
Кодированное обозначение	РКПС-СТЕРИМАГ 50мм x 200м		
Хранение и эксплуатация	LOT 010622 06.2022 06.2027		

УПАКОВКА № 1

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный со складкой РКПСЭ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм



Рулон комбинированный со складкой РКПСЭ-СТЕРИМАГ 150ммх60ммх100м по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"		1
Регистрационное удостоверение	РЭН 2019/8332 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке, шт.
Назначение	Для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сокращения их срока годности с учетом "замыкания" условий хранения, транспортировки, хранения и срока годности. Производства ООО "МедТест".	
Методы стерилизации	ПАР	03
Кодированное обозначение	РКПСЭ-СТЕРИМАГ 150мм х 60мм х 100м	
Хранение и эксплуатация	09.2022	

РУ № РЭН 2019/8332 от 14.10.2021

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МедТест»
В.Т. Фоменко
44 октября 2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и
хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ
по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018;
Рулоны комбинированные (бумажно-полиэтиленовые)
МСНР.942719.007-01РЭ

Настоящая инструкция распространяется на материалы упаковочные
одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ
по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018

- Рулон комбинированный однослойный РКПСЭ-СТЕРИМАГ
Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000
м с шагом 1 м;
- Рулон комбинированный со складкой РКПСЭ-СТЕРИМАГ
Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000
м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм;

ПАР MEDTEST

Сделано в России 25 марта 2022 года

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный плоский с перфорацией РКПЭп-СТЕРИМАГ


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.



Фотографическое изображение

Рулон комбинированный плоский усиленный РКПЭу-СТЕРИМАГ


Типоразмеры: ширины от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.

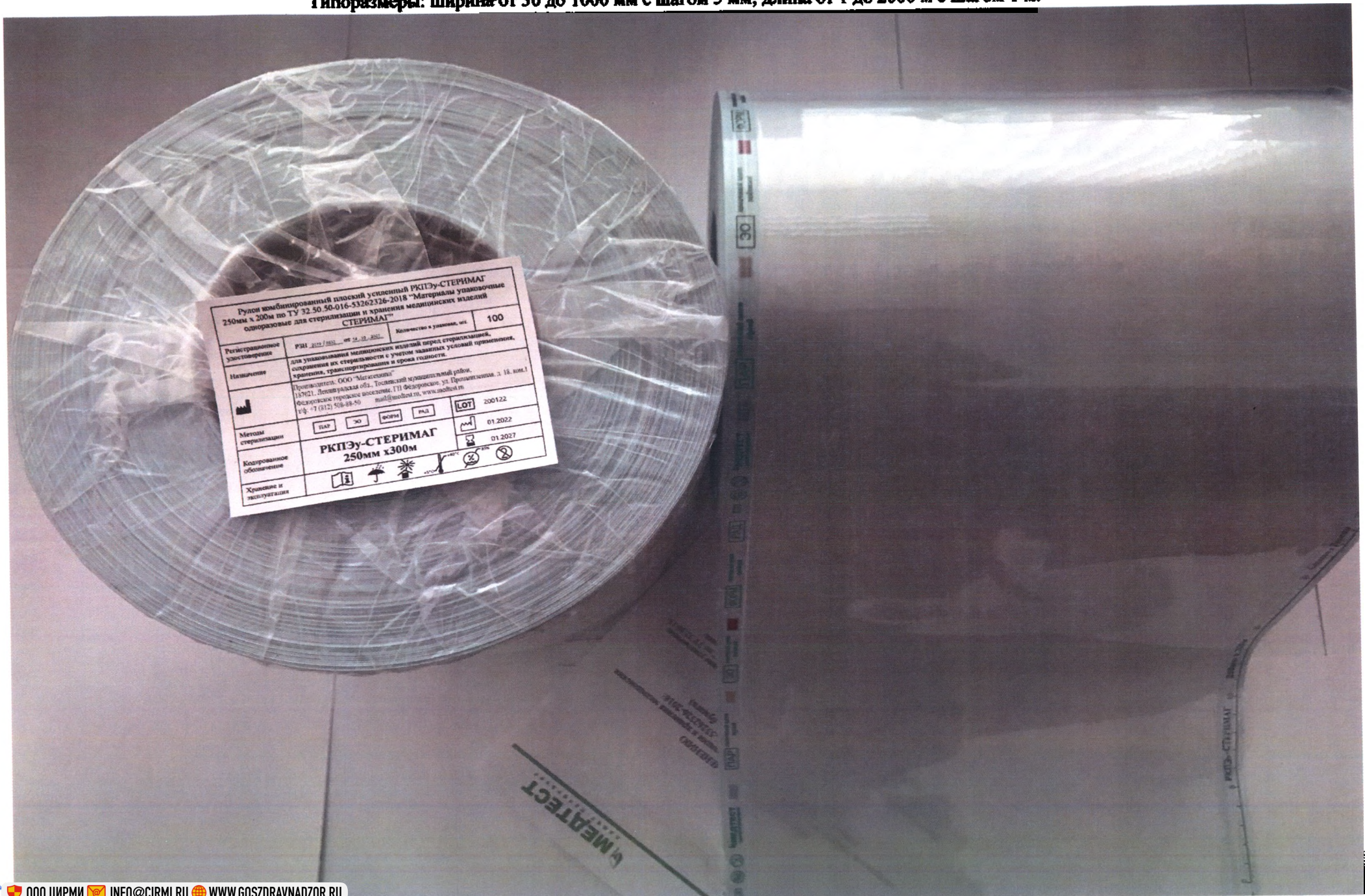

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный со складкой усиленный РКПСЭ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

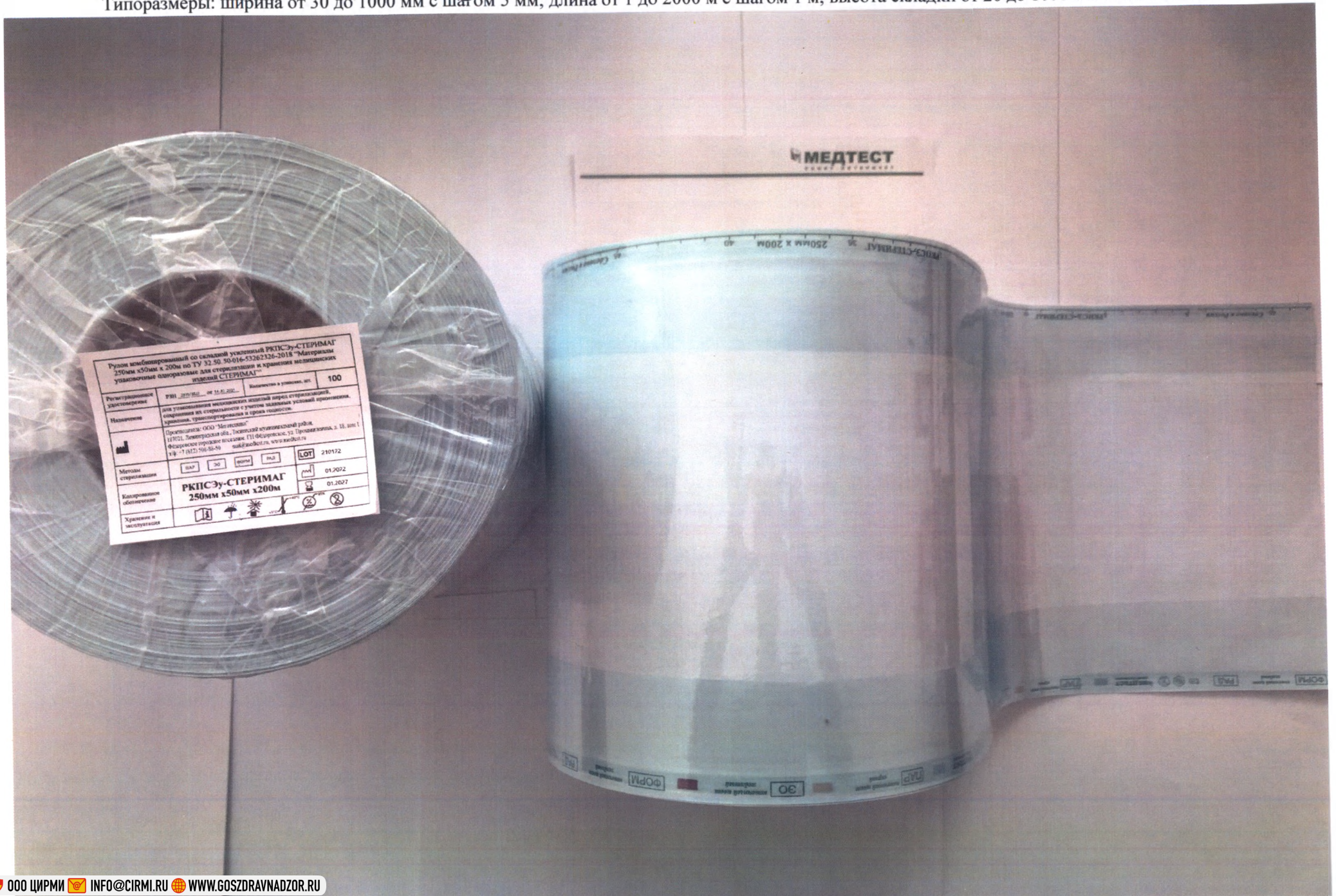

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.



Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский ПТН-СТЕРИМАГ



Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

стерилизации и хранения медицинских
50.50-016-53262326-2018:

ниже изложенный материал)

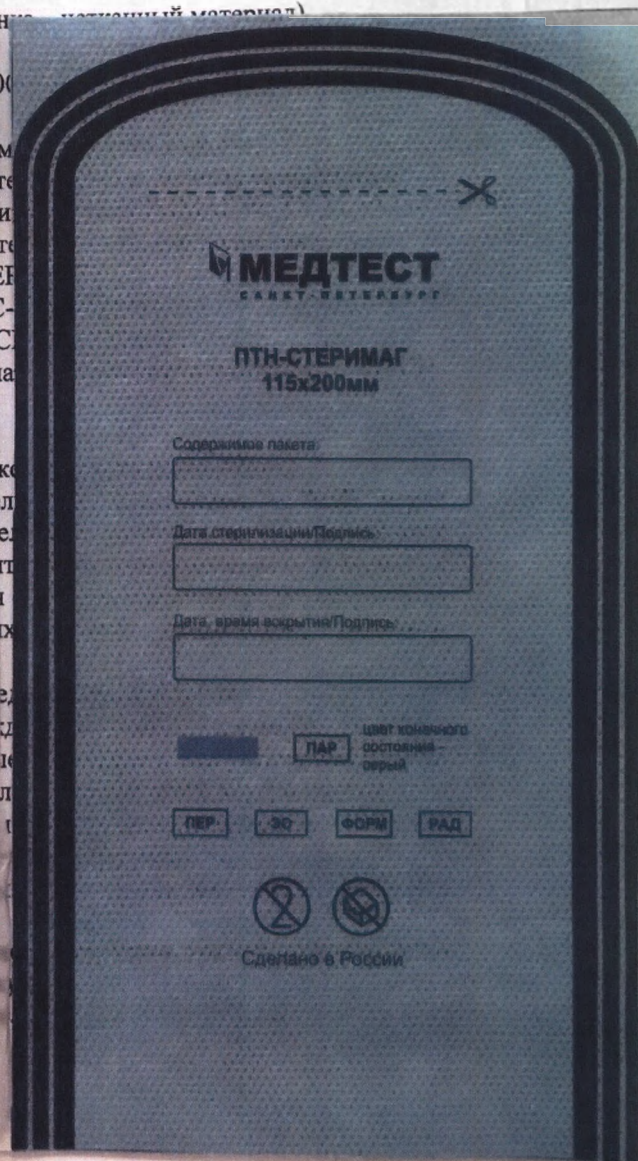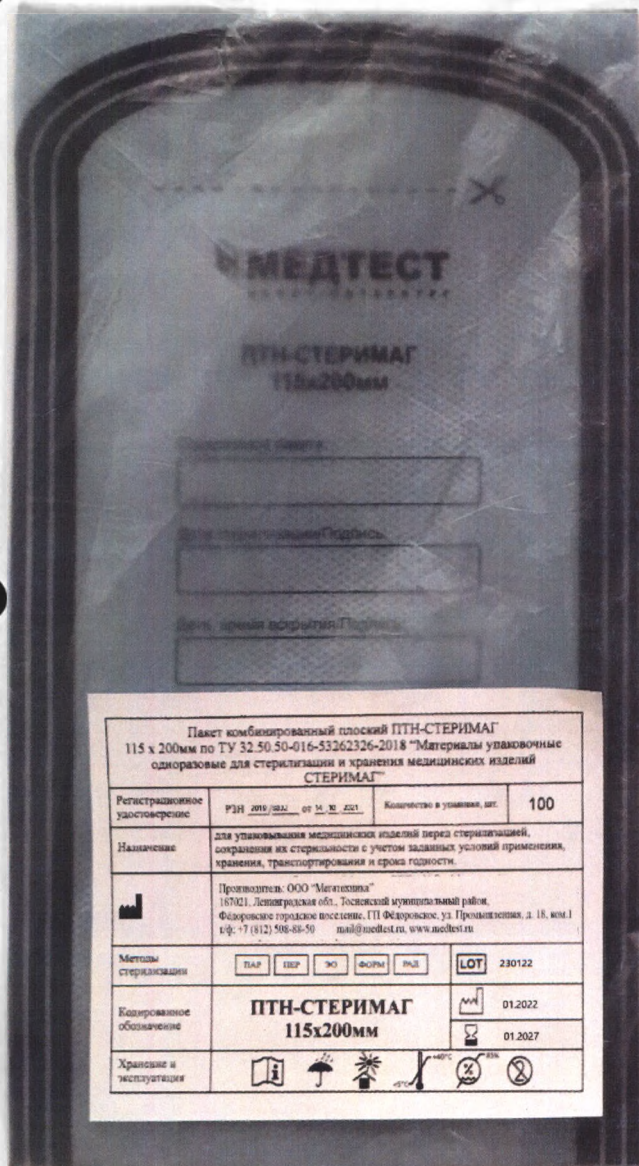

Пакет комбинированный плоский ПТН-СТЕРИМАГ 115 x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные однократные для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/001 от 14.11.2019	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Производитель	ООО "Медтест" 187021, Ленинградской обл., Тосненский муниципальный район, Фидоровское городское поселение, ПП Фидоровское, ул. Промышленная, д. 18, пом. 1 т/ф: +7 (812) 508-68-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ПЕР ЭО ФОРМ РД	LOT	230122
Кодированное обозначение	ПТН-СТЕРИМАГ 115x200мм		
Хранение и эксплуатация			

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный со складкой ПТНС-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

ПТНС-СТЕРИМАГ (пленка – нетканый материал)



Фотографическое изображение

Пакет комбинированный самоклеящийся ПСН-СТЕРИМАГ


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

(а – нетканый материал)

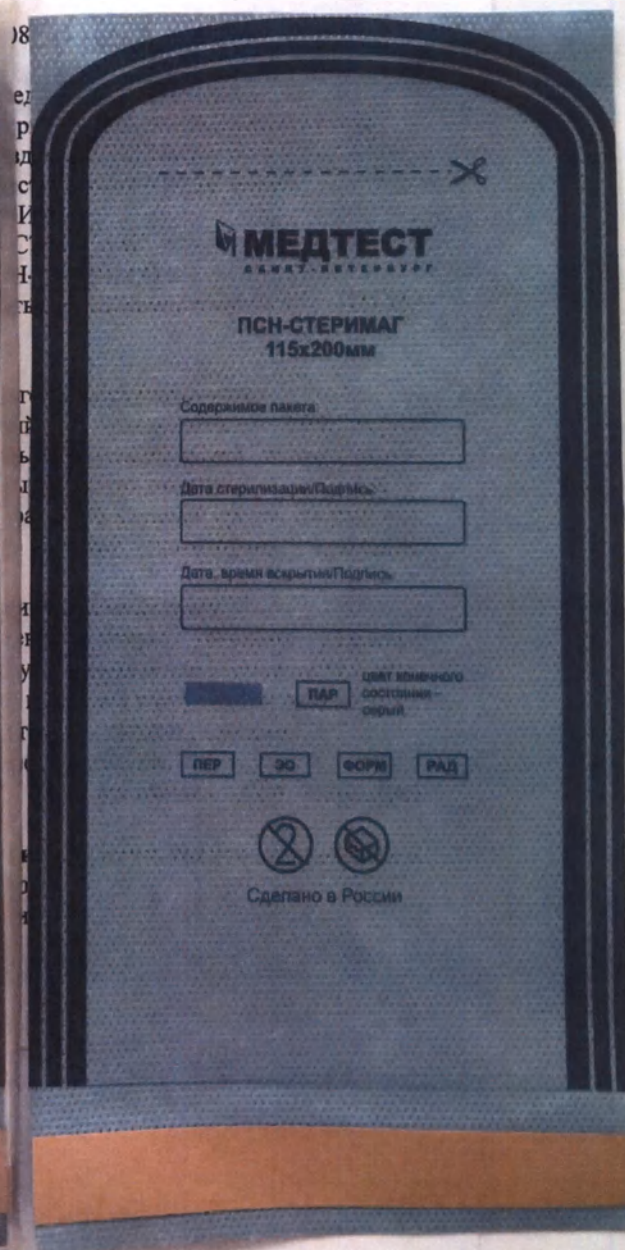

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный термозапечатаемый/самоклеющийся ПТСН-СТЕРИМАГ
 Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ -- ТУ 3



Пакет комбинированный термозапечатаемый/самоклеющийся ПТСН-СТЕРИМАГ 100 x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2018/8832 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Медтест" 187021, Ленинградская обл., Лосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, к/м 1 т/ф: +7 (812) 598-88-50 mail@medtest.ru www.medtest.ru		
Методы стерилизации	☐ ПАР ☐ ПЕР ☐ ЭО ☐ ФОРМ ☐ РАД	LOT	260122
Кодированное обозначение	ПТСН-СТЕРИМАГ 100x200мм		01.2022
			01.2027
Хранение и эксплуатация			

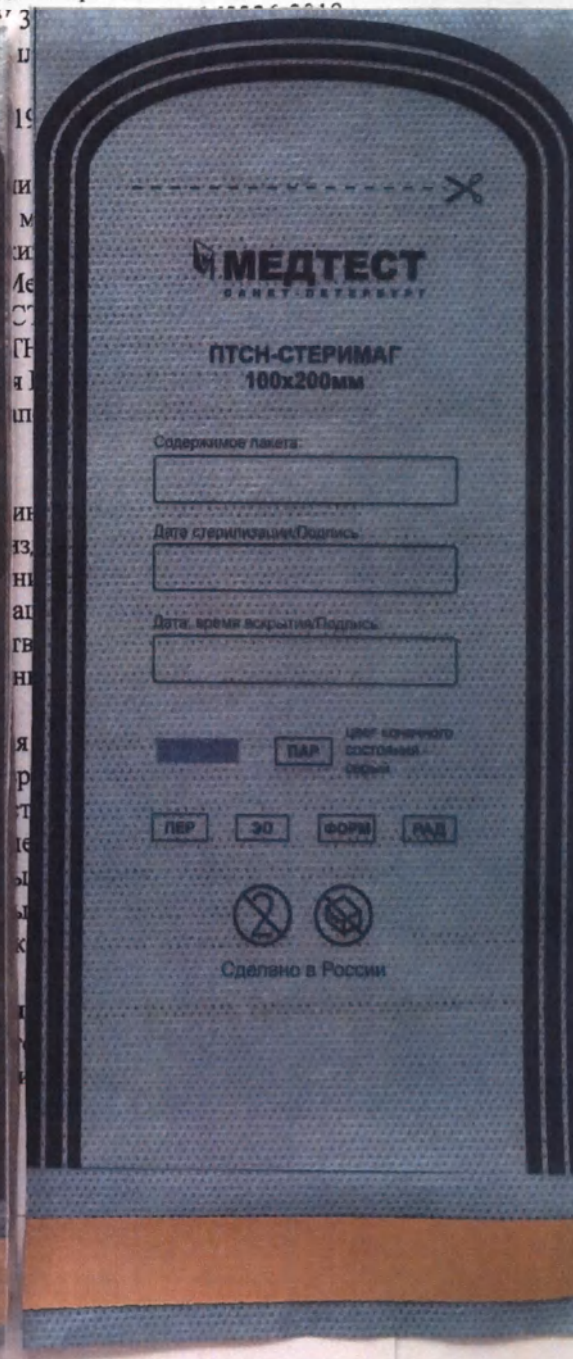


Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись

Дата, время вскрытия/Подпись

Цифр конечного состояния: ☐ ПАР

☐ ПЕР
 ☐ ЭО
 ☐ ФОРМ
 ☐ РАД

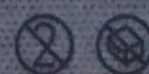


Сделано в России

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный плоский РКПСН-СТЕРИМ


Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.

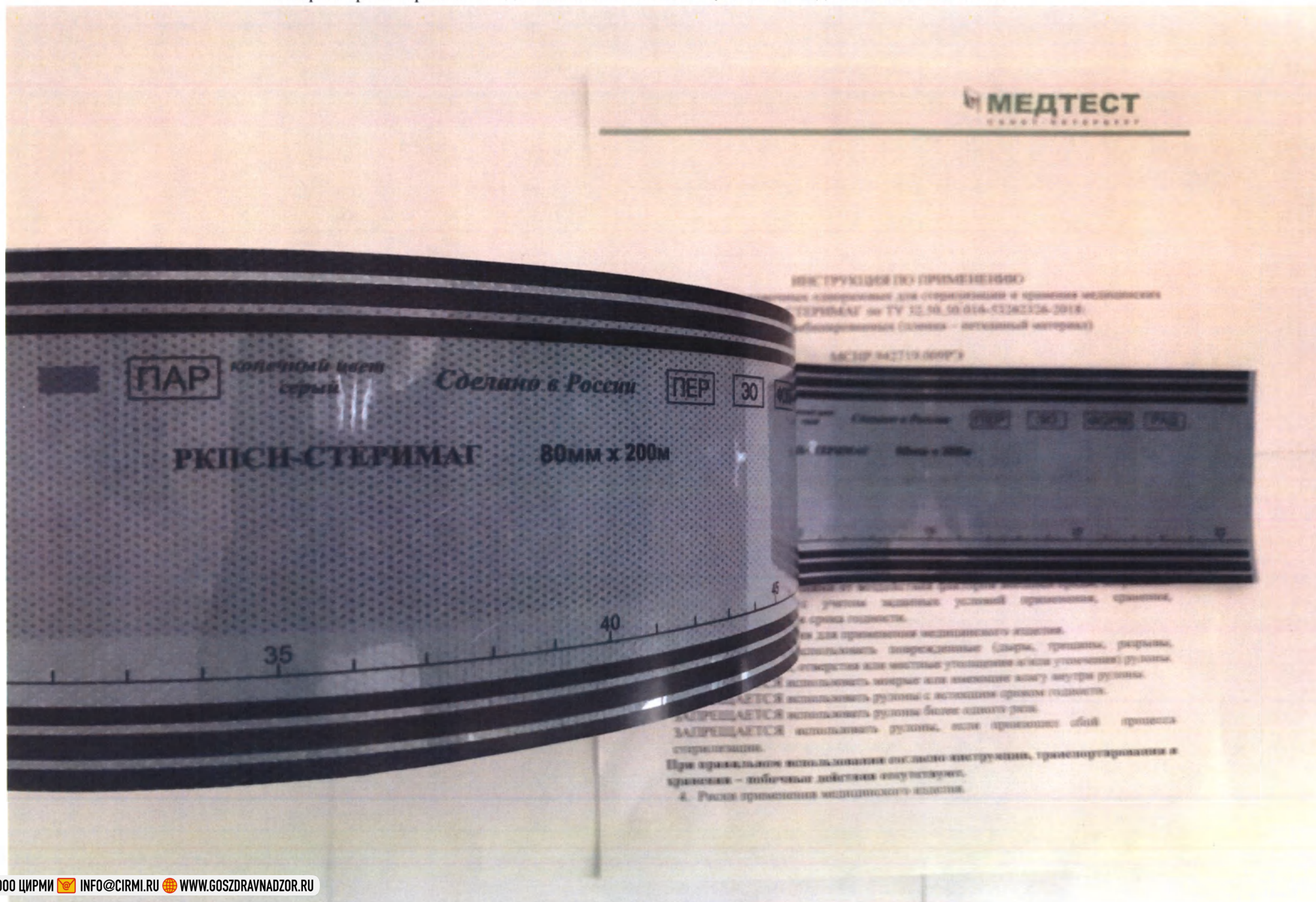

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный со складкой РКССН-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

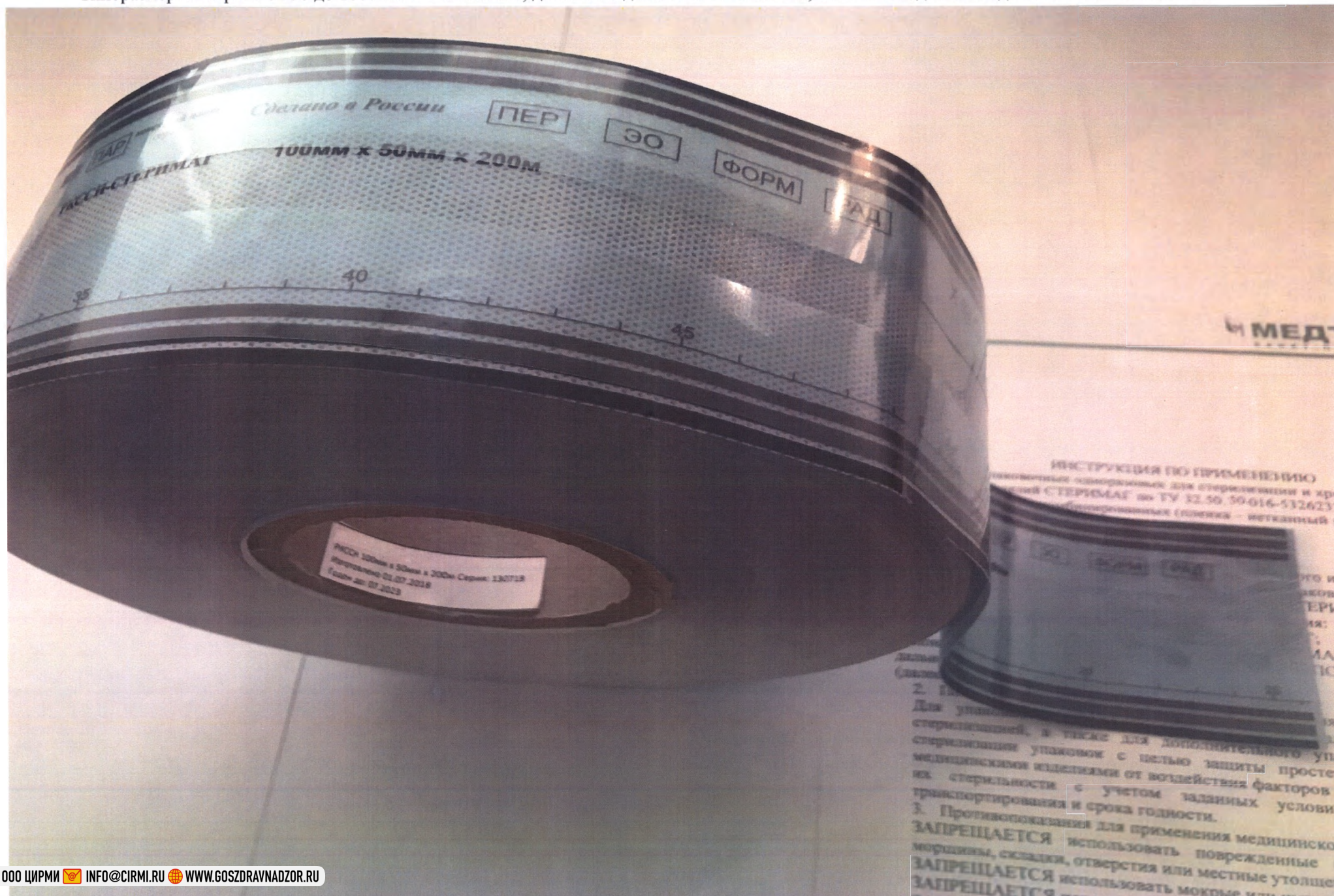


Фотографическое изображение

Рулон комбинированный плоский с перфорацией РКПСН-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

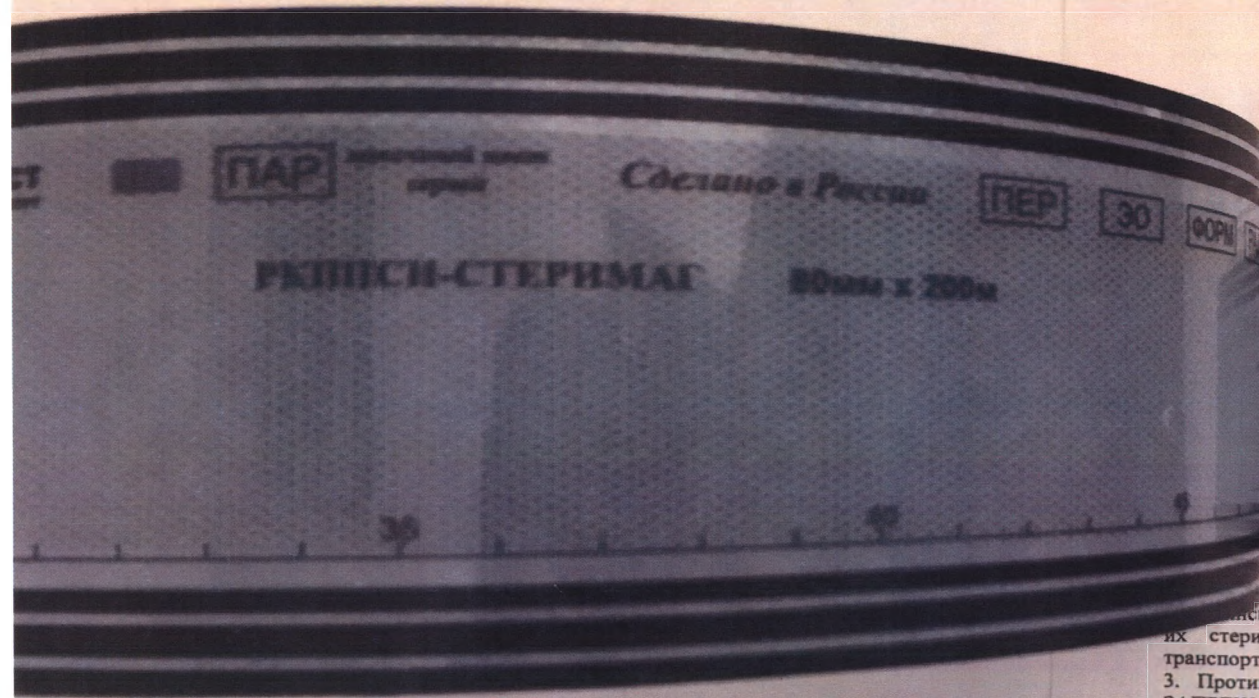

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

пакеточных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

комбинированных (пленка – нетканый материал)



цией, а также для дополнительного упаковывания подвергшихся
ции упаковок с целью защиты простерилизованных упаковок с
мскими изделиями от воздействия факторов внешней среды, сохранения
их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения,
транспортирования и срока годности.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденные (дыры, трещины, разрывы, морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или утончения) рулоны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мокрые или имеющие влагу внутри рулоны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны с истекшим сроком годности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны более одного раза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны, если произошел сбой процесса стерилизации.

При правильном использовании согласно инструкции, транспортировании и хранении – побочные действия отсутствуют.

4. Риски применения медицинского изделия.

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный плоский ПТНВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

МЕТТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПТНВ-СТЕРИМАГ
115x200мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО ФОРМ РАД

Пакет комбинированный плоский ПТНВ-СТЕРИМАГ 115 x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"

Регистрационное удостоверение	РН 20-9810 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, контроля их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Производитель	ООО "Медтест" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, пом. 1 т/ф: +7 (812) 908-48-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД	LOT	300122
Кодированное обозначение	ПТНВ-СТЕРИМАГ 115 x 200мм		01.2022 01.2027
Хранение и эксплуатация			

МЕТТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПТНВ-СТЕРИМАГ
115x200мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО ФОРМ РАД

Сделано в России


Фотографическое изображение

Пакет комбинированный со складкой ПТНСВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50.016-53262326-2018:
Пакетов комбинированных (пленка – нетканый материал)

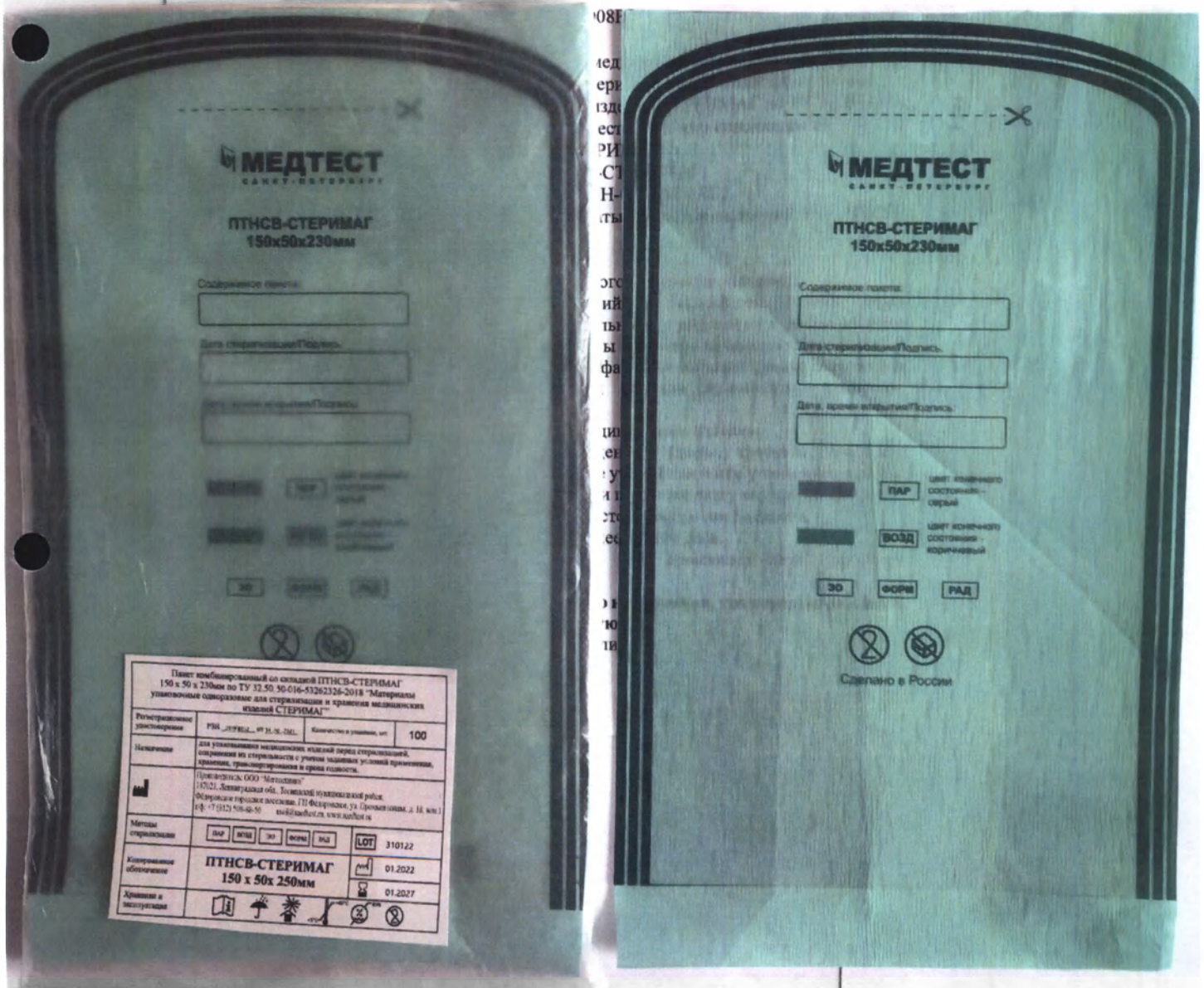

Фотографическое изображение

Пакет комбинированный самоклеящийся ПСНВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Пакетов комбинированных (пленка – нетканый материал)

150119 042710 008PЭ

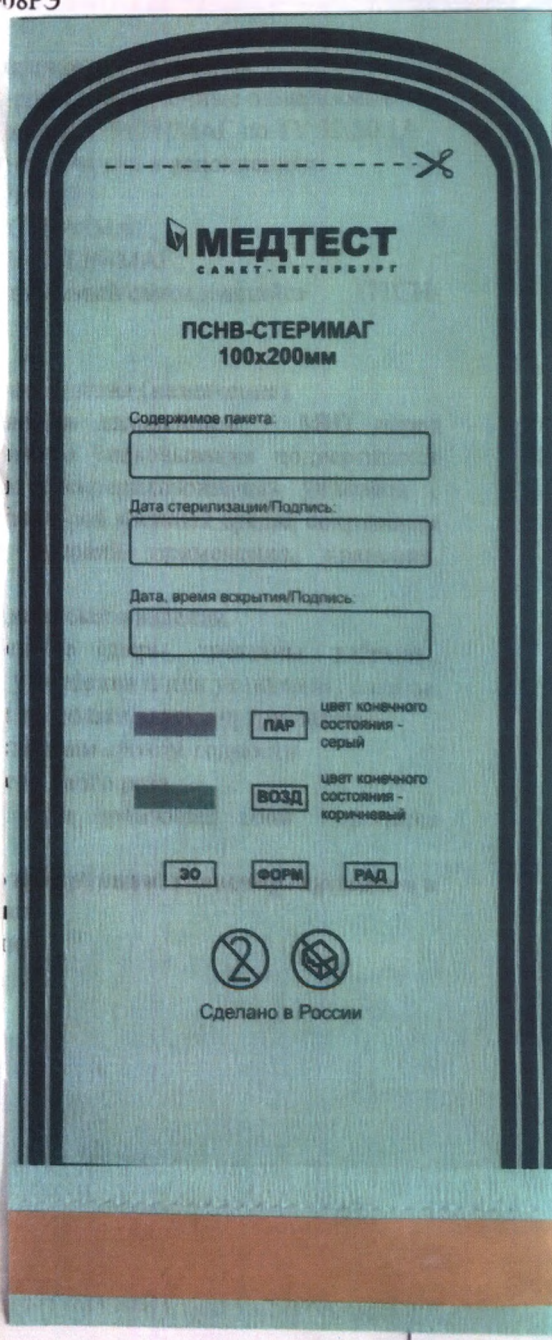


Пакет комбинированный термозапечатаемый/самоклеящийся ПТСНВ-СТЕРИМАГ
Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.016-53262326-2018:

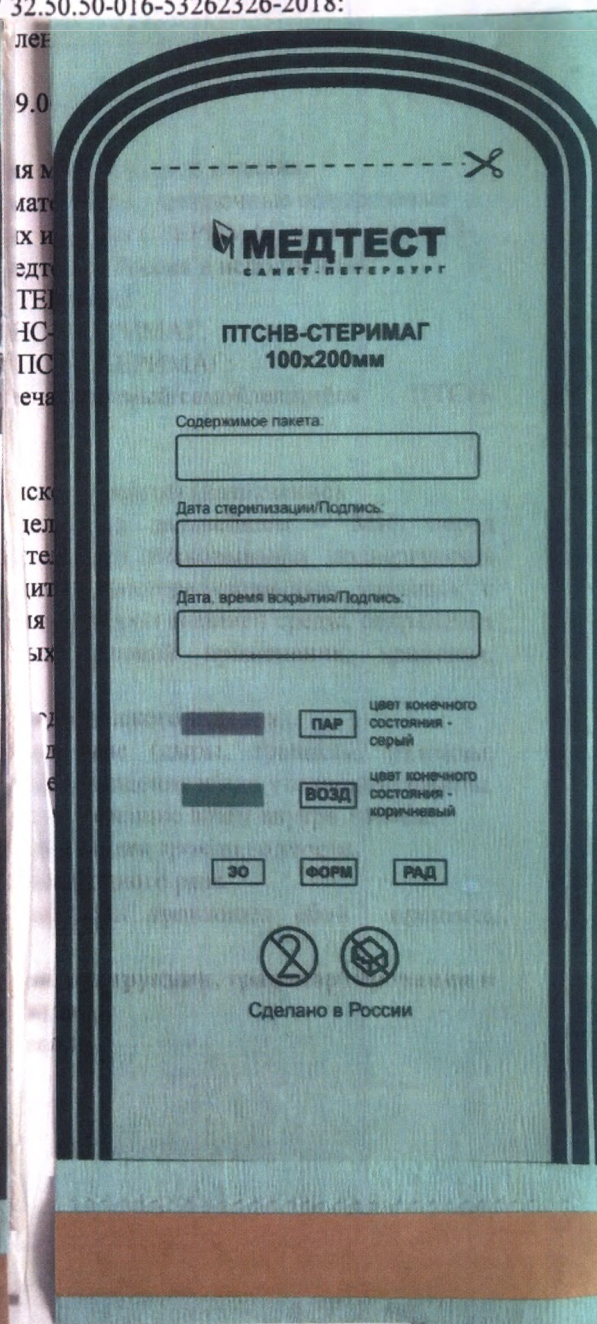

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный плоский РКПСНВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.

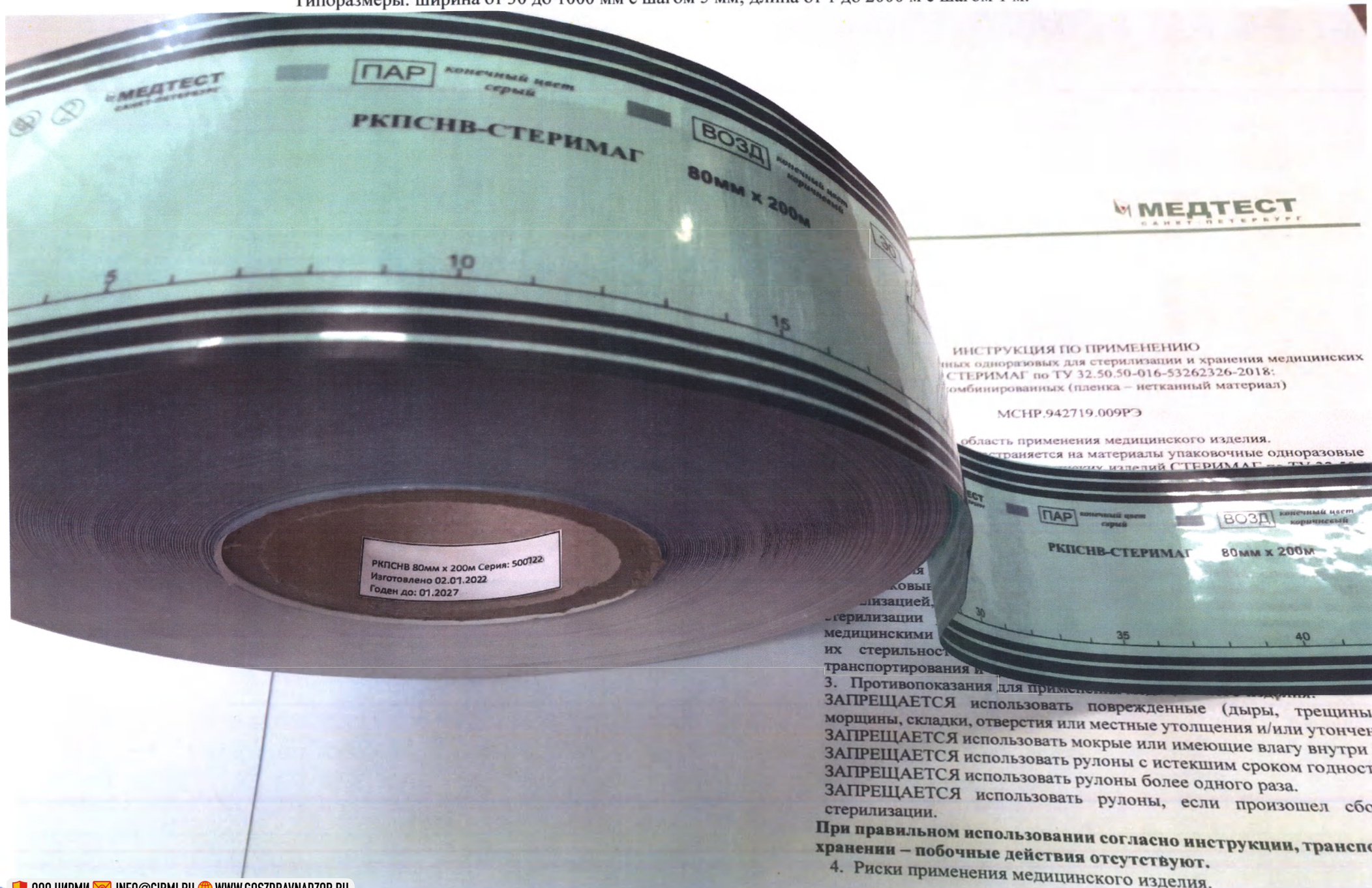

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
плоских одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:
комбинированных (пленка – нетканый материал)

МСНР.942719.009РЭ

область применения медицинского изделия.
применяется на материалы упаковочные одноразовые
медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018

МЕДТЕСТ
ПАР конечный цвет серый
ВОЗД конечный цвет коричневый
РКПСНВ-СТЕРИМАГ 80мм x 200м

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденные (дыры, трещины, морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или утончения).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мокрые или имеющие влагу внутри.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны с истекшим сроком годности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны более одного раза.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны, если произошел сбой стерилизации.


При правильном использовании согласно инструкции, транспортировании и хранении – побочные действия отсутствуют.

4. Риски применения медицинского изделия.

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный со складкой РКССНВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.

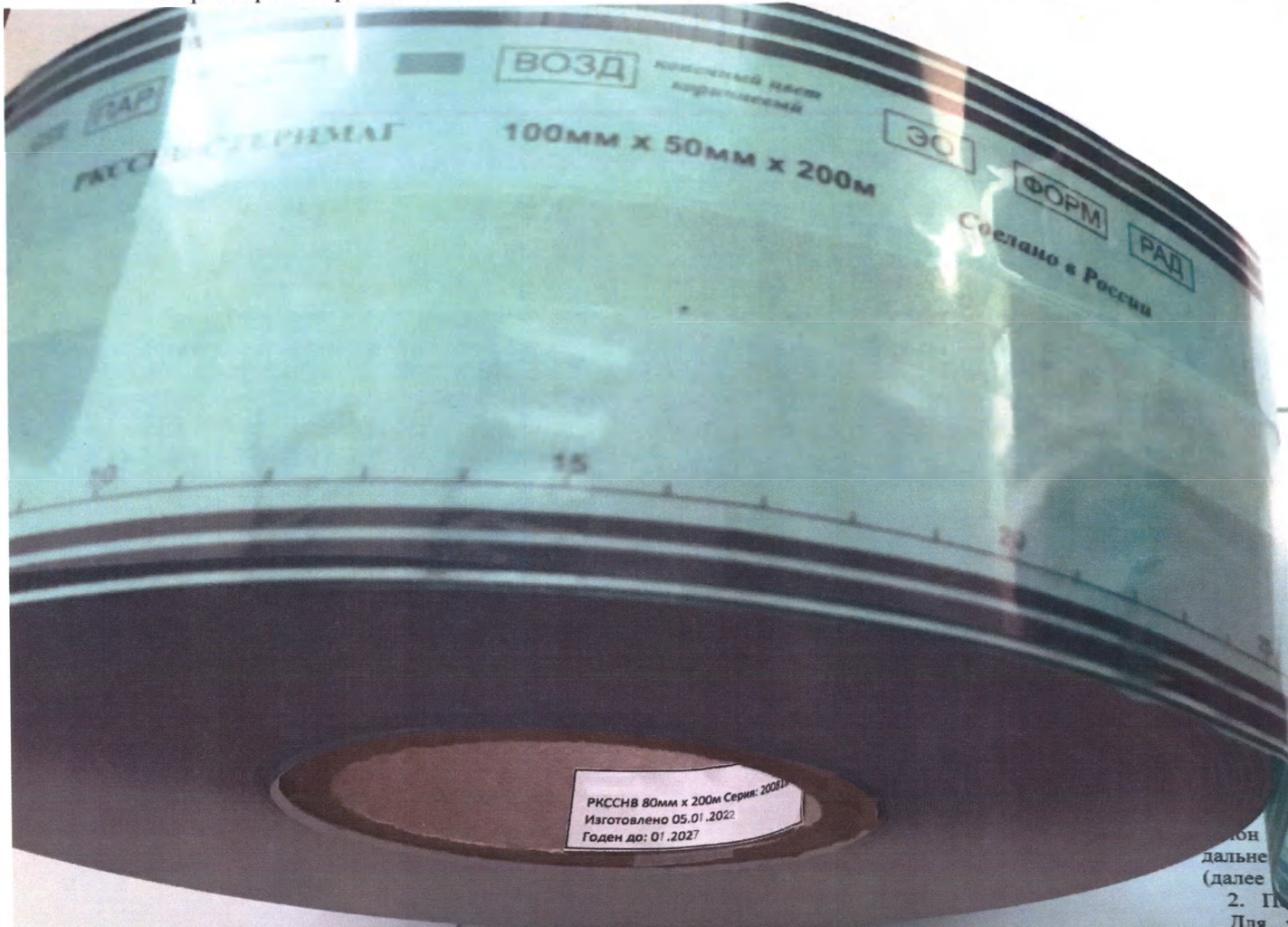

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинс
3:
ил)

100мм x 50мм x 200м Сделано в России

оразо
У 32

АГ

он
дальне
(далее


2. П
Для упа
стерилизацией, а также для дополнительного упаковывания п
стерилизации упаковок с целью защиты простерилизованных
медицинскими изделиями от воздействия факторов внешней сред
их стерильности с учетом заданных условий применени
транспортирования и срока годности.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать поврежденные (дыры, трещ
морщины, складки, отверстия или местные утолщения и/или уте
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мокрые или имеющие влагу вну
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны с истекшим сроком год
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны более одного раза.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рулоны, если произошел
стерилизации

Фотографическое изображение

Рулон комбинированный плоский с перфорацией РКПСНВ-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.

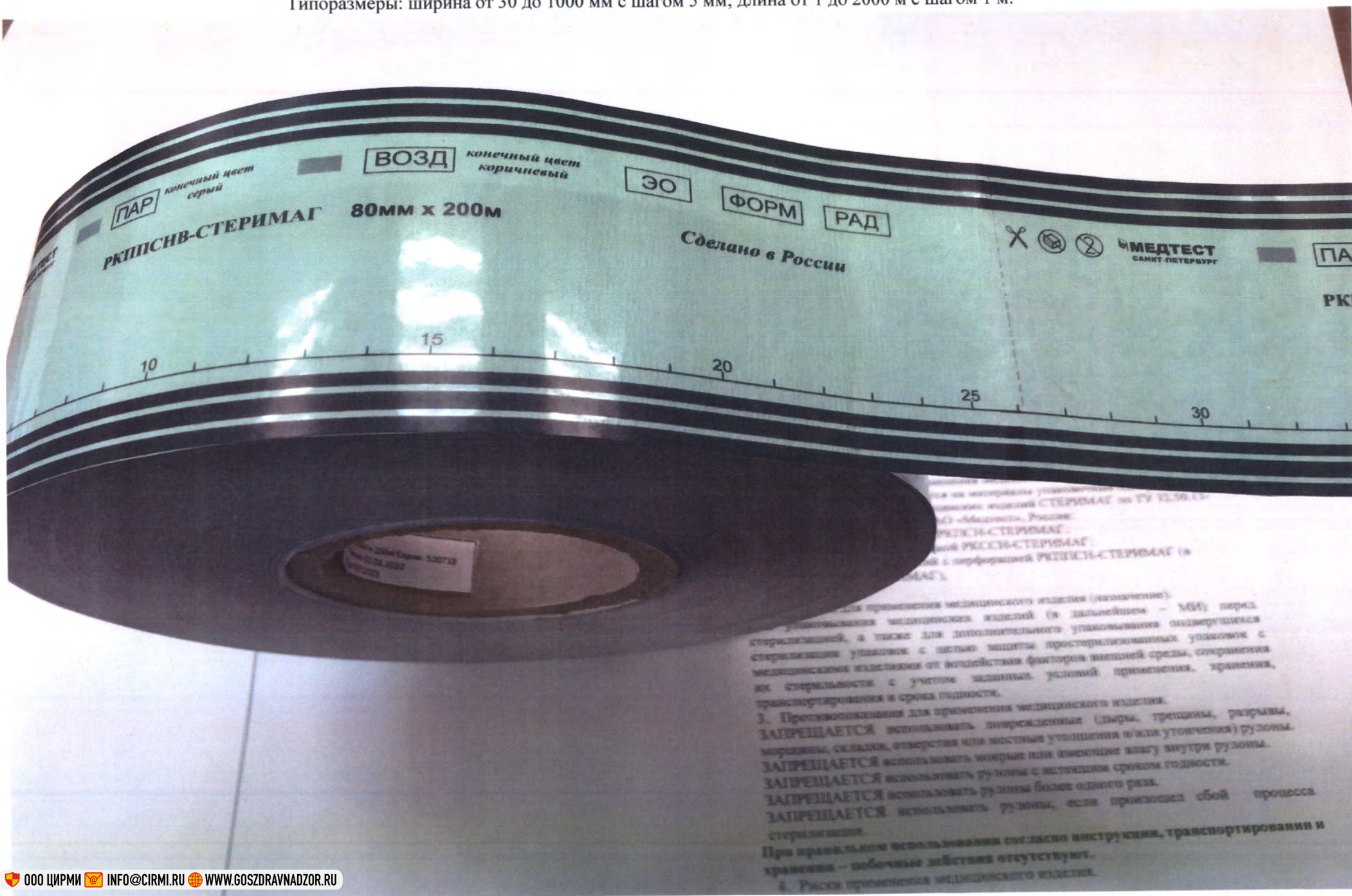

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ
Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения
медицинских изделий СТЕРИМАГ ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:



ПБТСП-СТЕРИМАГ
115x200мм

Пакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН ЛП.444 от 14.10.2011	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, опровержения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Изготовитель	Производитель: ООО "Медтест" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Фабричное городское поселение, П/П Фабричное, ул. Промышленная, д. 18, мкр. 1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР 30 ФОРМ РАД	LOT	340122
Кодированное обозначение	ПБТСП-СТЕРИМАГ 115x200		
Хранение и эксплуатация			

30 ФОРМ РАД

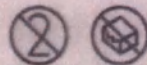

Сделано в России



ПБТСП-СТЕРИМАГ
115x200мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР

цвет конечного
состояния - серый


ВОЗД

цвет конечного
состояния -
коричневый

30

ФОРМ

РАД

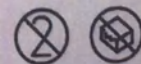

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатаемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ крафт

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Материал для упаковки одноразовых изделий для стерилизации и хранения по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018: термозапечатаемый/самоклеящийся

Пакет бумажный термозапечатаемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ крафт 115мм x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 202/1602 от 14.12.2021	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности		
Изготовитель	Продукты: ООО "Медтест" 187021, Ленинградская обл. Тосемский муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, км.1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД	LOT	350122
Кодированное обозначение	ПБТСП-СТЕРИМАГ крафт 115мм x 200мм		01.2022 01.2027
Хранение и эксплуатация			

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**

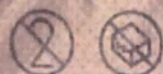

Сделано в России



ПБТСП-СТЕРИМАГ крафт 115x200мм

Содержимое пакета:


Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**

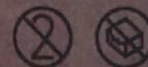

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатаемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ кристалл

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковки

для стерилизации и хранения
У 32.50.50-016-53262326-2018:
печатаемый/самоклеящийся



Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР

цвет конечного
состояния - серый

ВОЗД

цвет конечного
состояния -
коричневый

Пакет бумажный термозапечатаемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ кристалл 115мм x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗД 2019/8832_14.10.2021	Количество в упаковке, шт	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Производитель	Производитель: ООО "МедТест" 187021, Ленинградской обл., Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, пом. 1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 info@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД 30 ФОРМ РЗД	LOT	360122
Кодированное обозначение	ПБТСП-СТЕРИМАГ кристалл 115x200мм	01.2022	01.2027
Хранение и транспортировка			



ПБТСП-СТЕРИМАГ кристалл
115x200мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР

цвет конечного
состояния - серый


ВОЗД

цвет конечного
состояния -
коричневый

30

ФОРМ

РАД

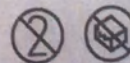

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм


материалов упа
из
Паке

1. Наименование
Данная инструкция
стерилизации и
53262326-2018
дальнейшем - П
2. Показания
Для упаковки
а также для до
целью защитить
воздействия ф
заданных усло
3. Противопопо
ЗАПРЕЩАЕТС
складки, отве
СТЕРИМАГ.
ЗАПРЕЩАЕТС
СТЕРИМАГ.
ЗАПРЕЩАЕТС
годности.
ЗАПРЕЩАЕТС
согласно инст
отеуются.

4. Риски прим
«Незначите
незначител
5. Общие тех
пакеты ПБ
32.50.13-01
50444 и
53262326-2
санитарных

Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ 100мм x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"		
Регистрационное заявление	RU2019-883244/10.2021	Количество в упаковке, шт. 100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий хранения, транспортирования и срока годности.	
Изготовитель	Производитель: ООО "МедТест" ИПЧЗ. Документ: 06. Технический регламент. Федеральное государственное учреждение, 116-й квартал, 1-й этаж, ул. Фрунзе, 116-й квартал, 1-й этаж, 116-й квартал, 1-й этаж	
Метод стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД	ЛОТ 370122
Контрольное обозначение	ПБСП-СТЕРИМАГ 100мм x 200мм	01.2022 01.2027
Хранение и использование		

ЭО ФОРМ РАД

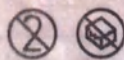

Сделано в России

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

медицинских
Г

норазовые для
32.50.13-016-
СТЕРИМАГ (в
я.

стерилизацией,
дни упаковок с
изделиями от
сти с учетом
годности.

ивы, морщины,
пакеты ПБСП-
пакеты ПБСП-
кшим сроком
го раза.
ные действия

ениваются как

их условий ТУ
1607, ГОСТ Р
ТР 9398-016-
соблюдением

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПБСП-СТЕРИМАГ
100x200мм


Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР Цвет конечного
состояния - серый
ВОЗД Цвет конечного
состояния -
коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**

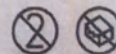

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ крафт

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
для бумажных самоклеящихся плоских ПБСП-СТЕРИМАГ крафт

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПБСП-СТЕРИМАГ крафт
230x280мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

ПАР

ВОЗД

цвет конечного
состояния - коричневый

ЭО

ФОРМ

РАД



Сделано в России

Плотно бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ крафт 230 x 280мм по ТУ 32.50.50-016-0126230-2018 "Материалы стерилизационные бумажные для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное заявление	РМД_201801... от 15.05.2018	Вместимость в упаковке, шт	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, хранения до стерилизации и хранения вымытых, сухих, готовых, применяемых, транспортируемых и хранящихся изделий		
Изготовитель	Полное наименование: ООО "Медтест" Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Троицкая, д. 18, литера "Б", 19-04/02-18-00-50 - нежилое помещение		
Место стерилизации	БАР	ВКЛ	100
Срок годности	01.2022	01.2027	
Содержимое пакета	ПБСП-СТЕРИМАГ крафт 230 x 280мм		
Примечание и исключения			

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПБСП-СТЕРИМАГ крафт
230x280мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР

цвет конечного
состояния - серый

ВОЗД

цвет конечного
состояния - коричневый

ЭО

ФОРМ

РАД



Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ кристалл

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных однофазовых для стерилизации и хранения

МД 0050.50.016-53262326-2018:



Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ кристалл 100мм x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные однофазовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	рун2019.8832 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Производитель	Производитель: ООО "МедТест" 17021, Ленинградская обл. Тосненский куржелезный рай.ж. Общественное учреждение "СЗ Оздоровление", ул. Промышленная, д. 18, вкл. 1 т/ф: +7 (812) 598-46-53 email: zakaz@mt.spb.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД	LOT	390122
Кодированное обозначение	ПБСП-СТЕРИМАГ кристалл 100мм x 200мм	01.2022	01.2027
Хранение и использование			

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**



Сделано в России



ПБСП-СТЕРИМАГ кристалл 100x200мм

Содержимое пакета:


Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**

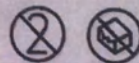

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатаемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения
медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:
термозапечатаемый/самоклеящийся

Пакет бумажный термозапечатаемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ 90мм x 50мм x 250мм по ТУ 32.50.13-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"	
Регистрационное удостоверение	Р/Н 2011/ВМ от 14.10.2021 Количество в упаковке, шт: 100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.
Изготовитель	Производитель: ООО "МедТест" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Причалная, д. 18, вил.1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru www.medtest.ru
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД LOT 400122
Кодированное обозначение	ПБТСС-СТЕРИМАГ 90мм x 50мм x 150мм 01.2022 01.2027
Хранение и эксплуатация	Иконки: книга, зонтик, солнце, огонь, микроб, запрет, запрет

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР

цвет конечного
состояния -
серый

ВОЗД

цвет конечного
состояния -
коричневый

ЭО

ФОРМ

РАД



Сделано в России

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПБТСС-СТЕРИМАГ
90x50x150мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР

цвет конечного
состояния -
серый


ВОЗД

цвет конечного
состояния -
коричневый

ЭО

ФОРМ

РАД

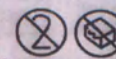

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатаемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ крафт

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения
по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018: термозапечатаемый/самоклеящийся
ПБТСС-СТЕРИМАГ

Регистрационное удостоверение	РЦН 2019.003 от 14.10.2019	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Производитель	Производитель: ООО "Медтест" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, пом. 1 т/ф: +7 (812) 598-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР	ВОЗД	ЛОТ 410122
Координатное обозначение	ПБТСС-СТЕРИМАГ крафт 90мм x 50мм x 150мм		01.2022
Хранение и эксплуатация	01.2027		

Дата, время вскрытия/записи

ПАР цвет конечного состояния - серый
ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЗО ФОРМ РАД



Сделано в России

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПБТСС-СТЕРИМАГ крафт
90x50x150мм

Содержимое пакета

Дата стерилизации/Подпись

Дата, время вскрытия/Подпись

ПАР цвет конечного состояния - серый
ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЗО ФОРМ РАД




Сделано в России


Пакет бумажный термозапечатаваемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ кристалл

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

термозапечатываемый/самоклеящийся
ИМ СТЕРИМАГ

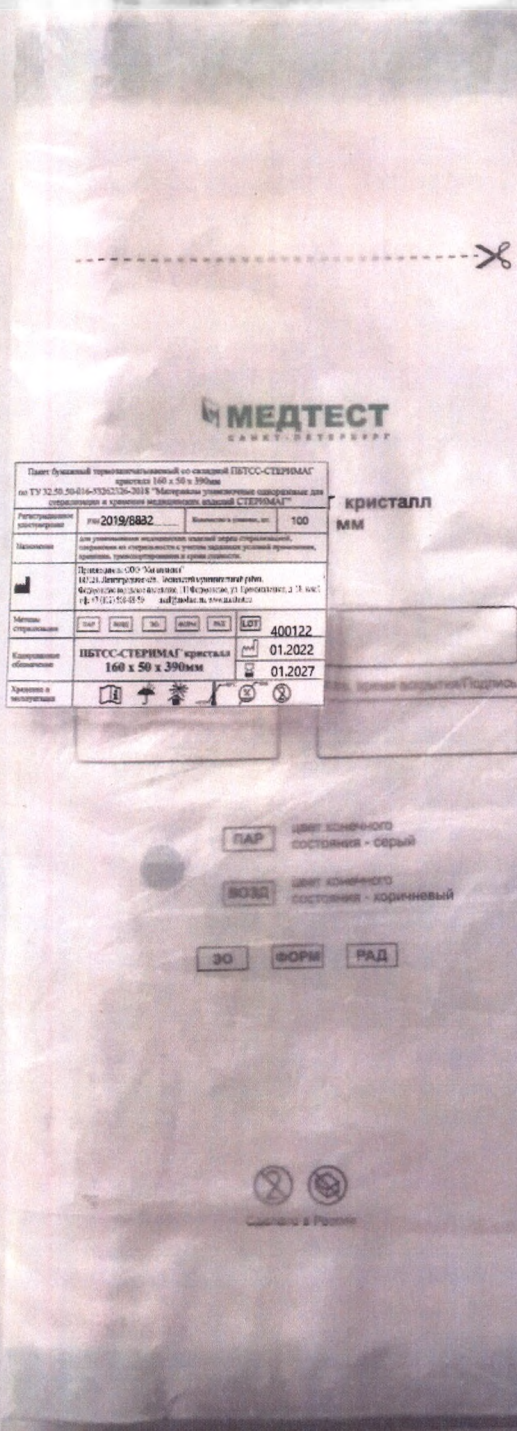

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.

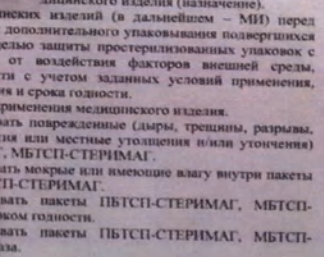

 ООО ЦПМИ INFO@CPMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатаемый/самоклеящийся плоский усиленный ПБТСПу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для использования в качестве барьерных для стерилизации и хранения

Где
ерм
МА

427

нен
на
ици

эчат
ише
апеч
ильн

осси
ици
изд

ните
аши
зде

лчесто
ока
ения

вреж
ме

СП-ч
рыс
РИ
акс
дно
акс

МЕДТЕСТ

Пакет бумажный термозапечатаемый/самоклеящийся плоский ПБТСПу-СТЕРИМАГ усиленный 115 x 200 мм по ТУ 32.90.50-016-51262326-2018
"Материалы упаковочные однократные для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"

Регистрационный номер	РЗН 202002_01 М.В. 2021	Количество в упаковке, шт	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения: хранения, транспортирования и срока годности.		
Изготовитель	Проектная ООО "Медтест" 117021, Ленинградская обл., Пушкинский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ПП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, лит. 1 т/ф: +7 (812) 565-19-50 info@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД	LOT	600122
Классификационное обозначение	ПБТСПу-СТЕРИМАГ 115x200мм		
Хранение и транспортировка	01.2022 01.2027		

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**

Сделано в России

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПБТСПу-СТЕРИМАГ
115 x 200 мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЭО **ФОРМ** **РАД**

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный самоклеящийся плоский усиленный ПБСПу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ

МСНР.942719.010РЭ

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Данная инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018: пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ (в дальнейшем - ПБСП-СТЕРИМАГ)




ПБСПу-СТЕРИМАГ


Пакет бумажный самоклеящийся плоский усиленный ПБСПу-СТЕРИМАГ 100мм x 200мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационный удостоверение	РЗН 201.0032 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, хранения до стерилизации с учетом заданных условий хранения, транспортирования и срока годности.		
Производитель	Проект-дизайн ООО "Медтест" 187021, Ленинградская обл. Тосненский муниципальный район, Федеральное дорожное общество, ПП Федеральное, ул. Промышленная, д. 14, к/м 1 т.ф. +7 (812) 518-88-50 e-mail: medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР	ВОЗД	ЗО
Кодирование обозначения	ПБСПу-СТЕРИМАГ 100мм x 200мм		
Хранение и транспортировка	Сделано в России		

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЗО ФОРМ РАД

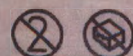

Сделано в России

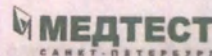

ПБСПу-СТЕРИМАГ 100x200мм

Содержимое пакета:


Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного состояния - серый

ВОЗД цвет конечного состояния - коричневый

ЗО ФОРМ РАД

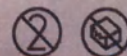

Сделано в России

Фотографическое изображение

Пакет бумажный термозапечатаемый со складкой усиленный ПБТССу-СТЕРИМАГ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения мелитиновых изделий ПБТССу-СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Пакет бумажный термозапечатаемый со складкой усиленный ПБТССу-СТЕРИМАГ 90мм x 50мм x 150мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для"			
Регистрационный установочный	РФ 2019-05-02, от 14.10.2021	Качество и упаковка, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Изготовитель	Производитель: ООО "МедТест" 17021, Ленинградская обл., Тосненский район Федотовское городское поселение, П/О Федотовское, ул. Промышленная, д. 18, пом. 1 т/ф: +7 (812) 906-15-50 info@medtest.ru www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ХО ФОРМ РАД	LOT	460122
Кодированное обозначение	ПБТССу-СТЕРИМАГ 90мм x 50мм x 150мм	01.2022	01.2027
Хранение и эксплуатация			



ПБТССу-СТЕРИМАГ
90x50x150мм

Содержимое пакета

Дата стерилизации/Подпись:

Дата, время вскрытия/Подпись:

ПАР цвет конечного
состояния -
серый
ВОЗД цвет конечного
состояния -
коричневый

ЗО ФОРМ РАД



Сделано в России

Пакет защитный пластиковый ПЗТ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

стерилизации и хранения медицинских
50.50-016-53262326-2018:

9.012P3

11

H

3

ИЛГС (в дальнейшем ИЛГС);
лотки; протектор; бирки

изделия (назначение).

я медицинских изделий (в дальнейшем для дополнительного упаковывания защиты простерилизованных упаковок икторов внешней среды, сохранения их чистоты, хранения, транспортирования

инского изделия.

(дыры, трещины, разрывы, морщины, или утончения) принадлежности. ги с истекшим сроком годности. инструкции, транспортировании и

Юбочные эффекты оцениваются как ска применения -1.

ия технических условий ТУ 32.50.50

по ГОСТ ISO 11607, ГОСТ Р 50444 и
по главному ТР 9398-016-53262326-2018

: с соблюдением санитарных норм

едены в таблице 1.

[illegible]

113T 250x320MM

Пакет защиты из пластика с впитывающей подложкой ПЗТВ

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

станции и хранения медицинских
6-53262326-2018:

ности упаковочные одноразовые

в ИЛН (в дальнейшем ИЛС);

а: лотки, протектор, бирки

тя (назначение).

адических изделий (в дальнейшем —
дополнительного упаковывания
выпробованных изделий в стерилизованных
внешней среды, сохранении их
ид, хранения, транспортирования

о изделия.

4. трещины, растрескивание, морщины, отслоения) при эксплуатации.

затекшим с другой стороны.

зукции, транспортировании и

ные эффекты оцениваются как
различения -1.

ого изделия.

Технические условия ТУ 32.50.13-СТ ISO 11607, ГОСТ Р 50444 и

СТ ISO 11607, ГОСТ Р 50444 и
стандарту ТР 9398-016-53262326-2018,
облюдением санитарных норм и

ы в таблице 1.

[illegible]

11315 280X220MM

Фотографическое изображение

Пакет защитный из нетканого материала ПЗТ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ

Пакет защитный из нетканого материала ПЗТН	
20х120мм из ТУ 12.10.001-2018 "Материалы нетканые, армированные, для стерилизации и хранения медицинских изделий"	
Регистрационный номер	РН-02-9100-14-01-001
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, хранения из стерилизации и упаковки изделий, упаковки, транспортировки и хранения
Материал	полипропилен
Восстановимость	ПЗТН
Размеры	100мм x 200мм
Срок годности	10 лет

Мультипакет защитный из нетканого материала МПН

МЕДТЕСТ

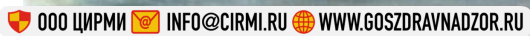

Фотографическое изображение Рулон защитный пластиковый РЗТ

Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м

Рулон защитный пластиковый РЗТ		
250х 320мм по ТУ 32.50.50-016-016-51263326-2016 "Материалы упаковочные" для стерилизации и хранения медицинских изделий		
СТЕРИМАТ		
Регистрационное удостоверение:	РЗТ 20-5002 от 05.03.2021	Классификация в упаковке: 07 1
Назначение:	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, хранения до вскрытия упаковки с учетом данных упаковки, хранения, транспортирования и срока годности	
Производитель:	Полное наименование: ООО "Стеримат" Юридический адрес: 107021, Замоскворецкий район, Фабричная улица в/д. 10, в/д. 1 ИНН 77-07-0000000	
Материал упаковки:		LOT 00000000
Кодированный обозначение:	РЗТ 100мм x 200мм	01.2021 01.2021
Условия хранения и транспортировки:		

ИМЕЮЩАЯ ПОДЛИННИК
 материалы упаковочные, предназначенные для
 упаковки медицинских изделий

1. Наименование и область применения:
 Для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией и хранения до вскрытия упаковки с учетом данных упаковки, хранения, транспортирования и срока годности.
 - Держатель для фиксации упаковки
 - Держатель для фиксации упаковки
 - Держатель для фиксации упаковки
 - Держатель для фиксации упаковки
2. В качестве стерилизации:
 - Материалы упаковочные, предназначенные для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией и хранения до вскрытия упаковки с учетом данных упаковки, хранения, транспортирования и срока годности.
 - Материалы упаковочные, предназначенные для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией и хранения до вскрытия упаковки с учетом данных упаковки, хранения, транспортирования и срока годности.
3. Противопоказания для применения:
 - Противопоказания для применения:
 - Противопоказания для применения:
 - Противопоказания для применения:
4. Риск применения:
 - Риск применения:
 - Риск применения:
 - Риск применения:

100мм x 200мм 100мм x 200мм

Фотографическое изображение


Лента для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ЛГС
 Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 0,07 до 500 м с шагом 0,005 м
 (Общий вид групповой упаковки)

Лента для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ЛГС ЛГС-СТЕРИМАГ 20мм x 50м по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	1
Назначение	для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Медатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	☐ ПАР ☐ ВОЗД ☐ ЭО ☐ ПЕР ☐ ФОРМ ☐ РАД ☒ LOT	530122	
Кодированное обозначение	ЛГС-СТЕРИМАГ 20 мм x 50 м		 01.2022
			 01.2027
Хранение и эксплуатация	    +5°C  +40°C  85% 		

Фотографическое изображение

Лента для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ЛГС

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 0,07 до 500 м с шагом 0,005 м

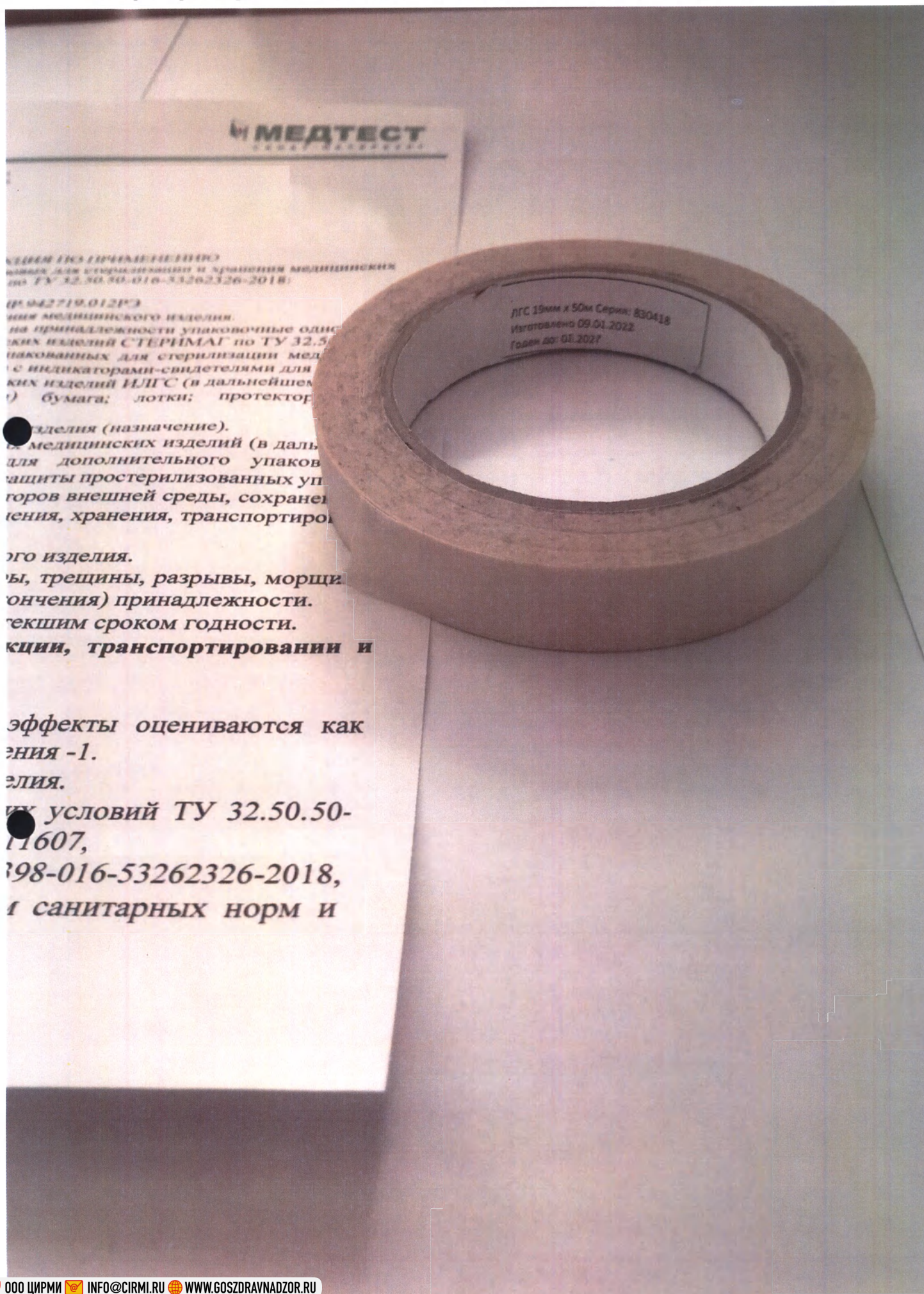

МЕДТЕСТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЛЕНТА ЛГС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
для стерилизации и хранения медицинских изделий
по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018

ИР 942719.012РЭ

для медицинского изделия.
на принадлежности упаковочные односторонние
медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018
упакованных для стерилизации медицинских изделий
с индикаторами-свидетелями для медицинских изделий ЛГС (в дальнейшем
лента) бумага; лотки; протекторы

изделия (назначение).
для медицинских изделий (в дальнейшем - изделия) для дополнительного упаковки
защиты простерилизованных упаковок в условиях внешней среды, сохранения
информации, хранения, транспортировки

изделия.

трещины, разрывы, морщины, повреждения) принадлежности.
текущим сроком годности.

транспортировании и

эффекты оцениваются как
классификация -1.

изделия.

условий ТУ 32.50.50-016-53262326-2018,

98-016-53262326-2018,

и санитарных норм и

Фотографическое изображение


Лента с индикаторами-свидетелями для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий
ИЛГС, Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 0,07 до 500 м с шагом 0,005 м
(Общий вид групповой упаковки)



Фотографическое изображение

Лента с индикаторами-свидетелями для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ИЛГС

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 0,07 до 500 м с шагом 0,005 м

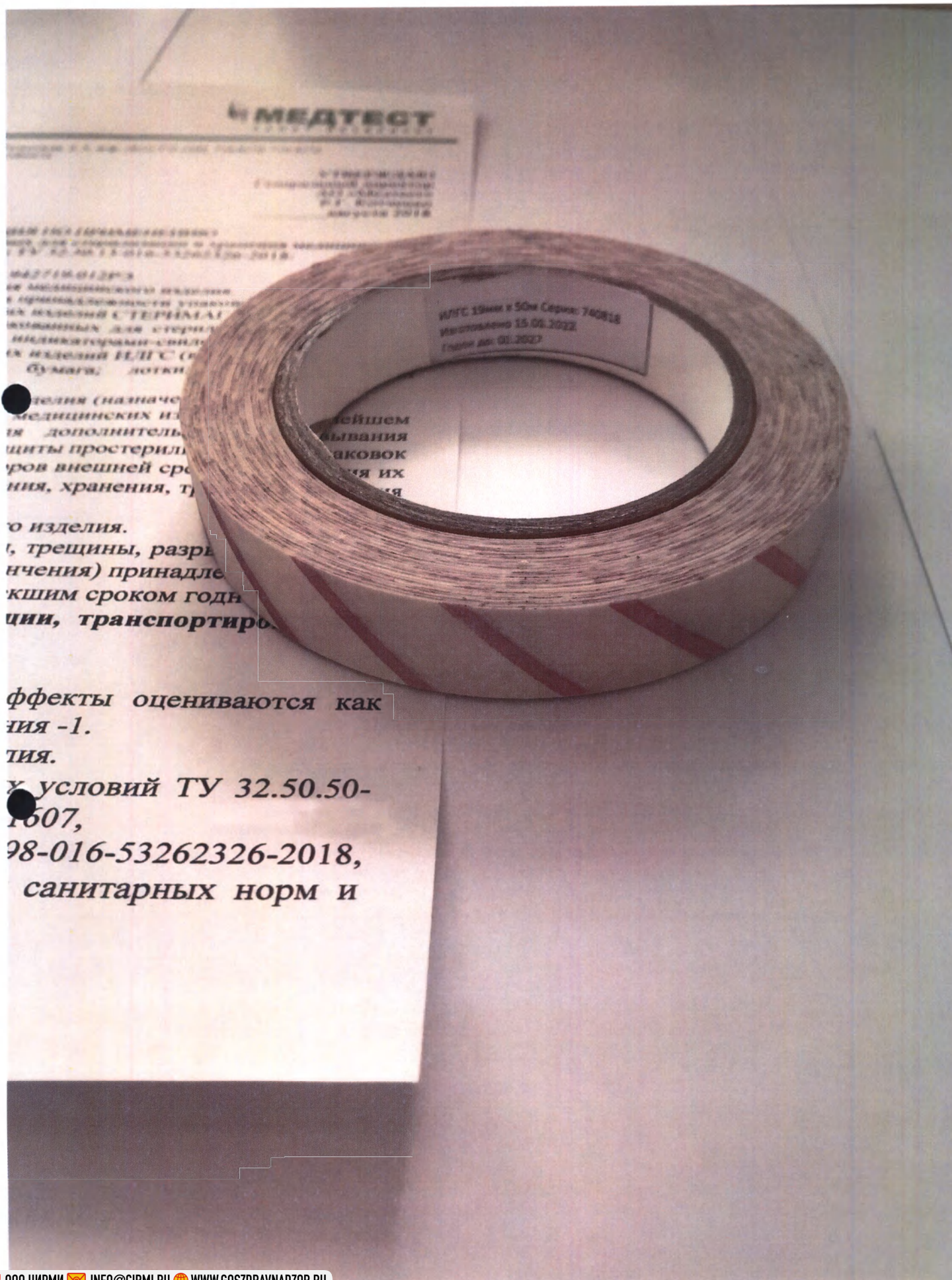

эффекты оцениваются как
ния -1.

тия.

х условий ТУ 32.50.50-
1607,

98-016-53262326-2018,


санитарных норм и

Фотографическое изображение

Материал влагопитывающий (влагопоглощающий)

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм, от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м. (Общий вид групповой упаковки)

Материал влагопитывающий (влагопоглощающий) 400мм x 400мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РА02019/8832-14.10.2020	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
Изготовитель	Заводская ООО "Медтест" 17521, Новгородская обл., Товстославский район, Белорусское городское поселение (П.Белорусское, т.п. Дроздовское, д.18 км.1) т.ф. +7(812) 516-86-61 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Метод стерилизации	ПАР ВОДЯНОЙ ЖЕ ПЕР ВОЗДУШНОЙ РАД	LOT	550122
Срок годности	Материал влагопитывающий (влагопоглощающий) 400мм x 400мм		
Хранение и транспортировка	01.2022 01.2027		

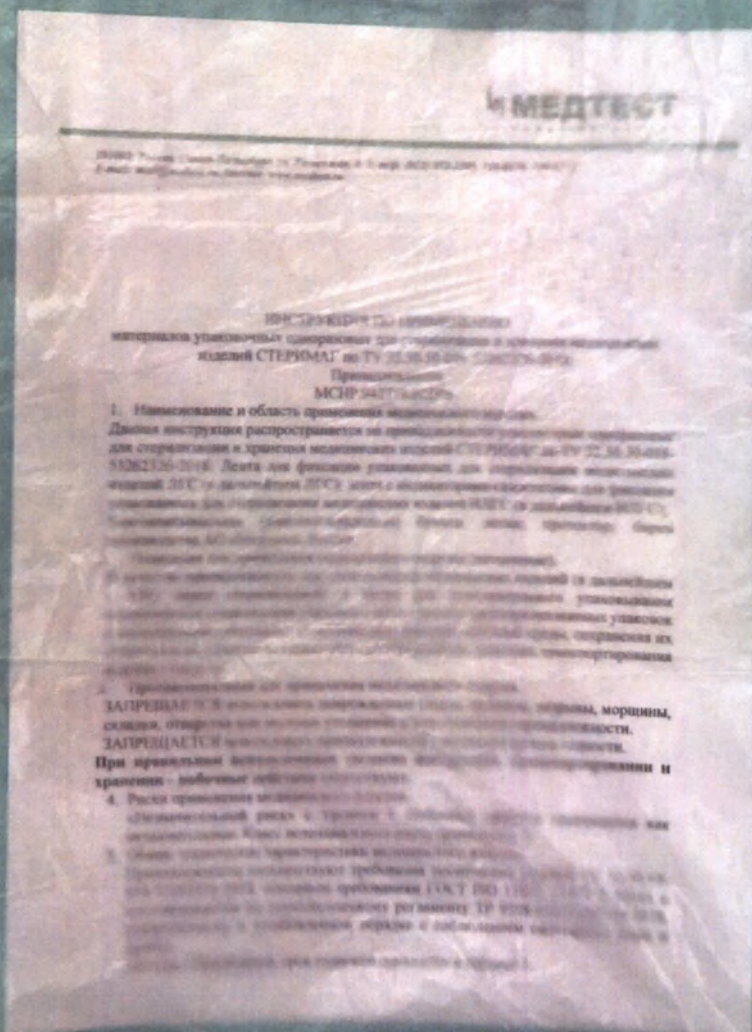

Фотографическое изображение
Материал влаговпитывающий (влагопоглощающий)

Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм., от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.


МЕДТЕСТ
FARM-TEST

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских
накожных СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018

Фотографическое изображение

Лотки

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000 мм с шагом 5 мм, высота от 5 до 100 мм с шагом 1 мм. (Общий вид групповой упаковки)

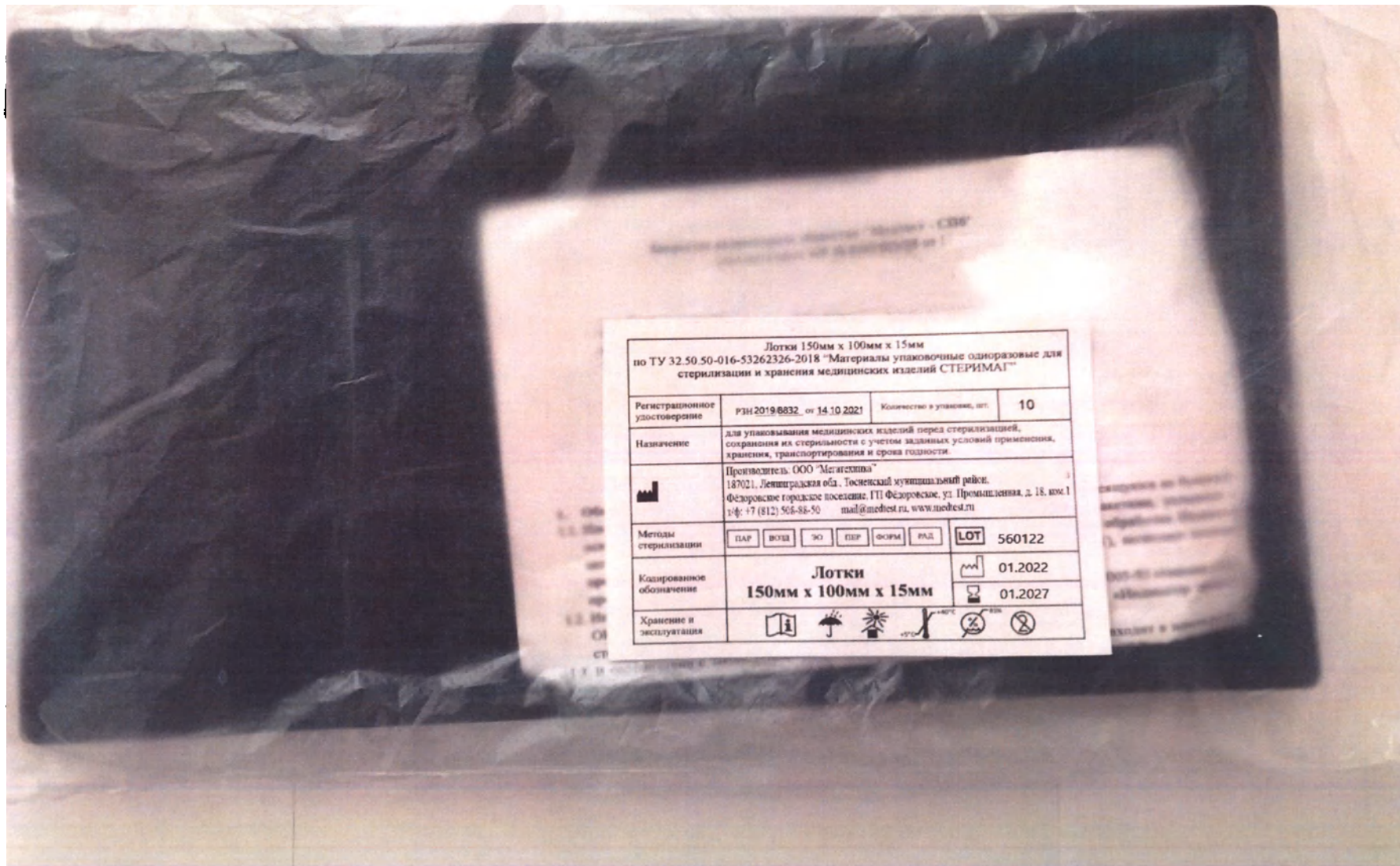

Фотографическое изображение

Лотки (Общий вид групповой упаковки)

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм, высота от 5 до 100 мм с шагом 1 мм.

Лотки 150мм x 100мм x 15мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"	
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021
Назначение	для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.
Методы стерилизации	ПАР ВОД ЭО ПЕР ФОРМ РАД LOT 560122
Кодированное обозначение	Лотки 150мм x 100мм x 15мм 01.2022 01.2027
Хранение и эксплуатация	☞ ☂ ☼ +5°C +40°C 85% ☞ ☞

Фотографическое изображение

Лотки

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм, высота от 5 до 100 мм с шагом 1 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Лотки

МСНР.942719.014РЭ

Настоящая инструкция распространяется на материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

532
1



ей,
ия,

ий

16-

жкиси

медицинских

4.3. Вид
изделий по видам – 185910;

4.4. ОКПД2 32.50.50.190

Фотографическое изображение

Лотки

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм, высота от 5 до 100 мм с шагом 1 мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

1. Назначение
Данная инструкция предназначена для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
 - Лотки
 - Лотки
 - Лотки
 - Лотки
 - Лотки
 - Лотки
2. Применение
В качестве упаковочного материала для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
3. Применение
ЗАПРЕЩАЕТСЯ складывать медицинские изделия СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018.
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
 - Медицинские изделия
4. Применение
«Не применять для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018».
5. Применение
При применении лотков СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018, необходимо соблюдать следующие требования:

Фотографическое изображение

Протектор

Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм.

МЕДТЕСТ

Протектор 50мм x 130мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	50
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Медатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком.1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	☐ ПАР ☐ ВОЗД ☐ ЭО ☐ ПЕР ☐ ФОРМ ☐ РАД	LOT	570122
Кодированное обозначение	Протектор 50мм x 130мм		01.2022
			01.2027
Хранение и эксплуатация	    +40°C  +5°C  85% 		

Партия:

с коду

несса

енклатуру

сс 1 пс

ованны

класс

атору Р

индикатор



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материалов упаковочных одноразовых для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018:

Протектор

MCHP.942719.015P3

Настоящая инструкция распр
стерилизации и хранения ме
53262326-2018: Протектор пр

1. Показания для применения

Для упаковки медицинских
сохранения их стерильности
транспортирования и срока

2. Противопоказания для пр

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3. Риски применения медици

Класс потенциального риска
При использовании согласно
транспортирования и хранения

4. Технические характеристики

4.1. Протектор соответствует
53262326-2018, основные

4.2. Методы стерилизации: этилена, формальдегида

4.3. Вид изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам – 185910.

4.4. ОКПД2 32.50.50.190



Протектор

50 X 130 mm

ы упаковочные одноразовые для
ГЕРИМАГ по ТУ 32.50.50-016-
», Россия.

ия (назначение).

ем — МИ) перед стерилизацией, условий применения, хранения,

го изделия.

ектор.

й протектор.

ам сроком годности.

ного раза.

именению, соблюдении условий
вия отсутствуют.

Изделия.

ических условий ТУ 32.50.50-016-
211607

газовый (с применением окиси азотной) (пероксидный).

Фотографическое изображение Бирки


Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм.

Бирки 50 x 130мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	50
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности		
	Производитель: ООО "Медатехника" 187021, Ленинградская обл., Гусевский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ПЕР ЭО ФОРМ РАД	LOT	620122
Кодированное обозначение	Бирки 50x130мм		 01.2022
Хранение и эксплуатация	 01.2027		

вания со
дения паро
сс 1 по ГС
ованных.
классифи
атору Рос
индикатор

укладками с
и. Индикатор
ляет отличить
отнесена к коду
икатор процесса
т в номенклатуру

Фотографическое изображение
Пример маркировки групповой упаковки

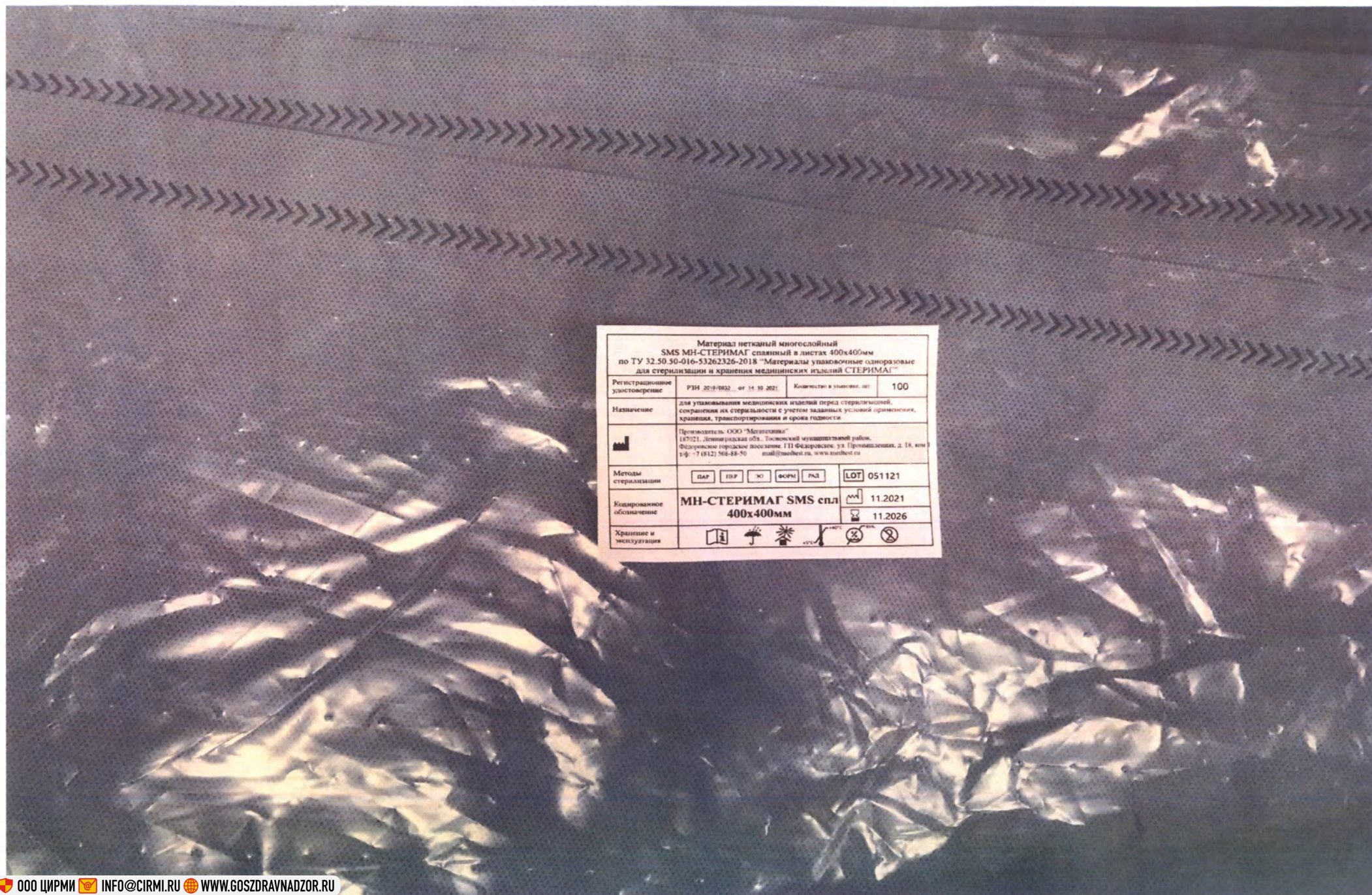

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах 400х400мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 32.19.0532 от 14.10.2021	Количество в упаковке, шт.	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сортировки их стерильности с учетом заданных условий хранения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Медистим" (187021, Ленинградская обл., Тосновский муниципальный район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, км 3) т: +7 (812) 568-88-50 mail@medistim.ru, www.medistim.ru		
Методы стерилизации	☐ ПАР ☐ ГДР ☐ ХО ☐ ВСРМ ☐ РАД	LOT	051121
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMS спл 400х400мм		11.2021
			11.2026
Хранение и эксплуатация	     		

Фотографическое изображение
пример маркировки транспортной упаковки


Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ 400х400мм стандарт в листах по ТУ 32.50.13-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021	Количество в коробке, шт	1
Назначение	для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком.1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	☐ ПАР ☐ ПЕР ☐ ЭО ☐ ФОРМ ☐ РАД		☒ LOT 051121
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMS стл 400х400мм		 11.2021
			 11.2026
Хранение и эксплуатация	    +40°C +5°C  85% 		

Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ 300 x 300 мм в листах по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"				
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество листов в упаковке	500	
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.			
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком 1 т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru			
Методы стерилизации	☐ ПАР	☐ ВОЗД	☐ ЭО	☐ ФОРМ ☐ РАД
Кодированное обозначение	КБ-СТЕРИМАГ л 300 x 300 мм	☐ LOT	030122	
			01.2022	
Хранение и эксплуатация	     +40°C -85%		 01.2027	

Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ 300мм x 100 м в рулонах по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 "Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ"				
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.		Количество в упаковке, шт	1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.			
	Производитель: ООО "Медгестехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. I т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail: mediest.ru , www.mediest.ru			
Методы стерилизации	ПАР ВОЗД ЭО ФОРМ РАД			
Кодированное обозначение	КБ-СТЕРИМАГ р 300мм x 100 м	LOT	030122	
			01.2022	
Хранение и эксплуатация	    		+40°C +5°C 85%	 01.2027

Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах 600х600мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»						
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.			Количество листов в упаковке	100	
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.					
	Производитель: ООО "Медгестехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком.1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru					
Методы стерилизации	ПАР	ПЕР	ЭО	ФОРМ	РАД	LOT 240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ л 600х600мм (белый)					 01.2023
Хранение и эксплуатация			 +5°C	 +40°C	 85%	 01.2028


Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ [®] в рулонах 600мм x 100мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ [®] »						
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.			Количество в упаковке, шт		1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.					
	Производитель: ООО "Медгестехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком.1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru					
Методы стерилизации	☐ ПАР	☐ ПЕР	☐ ЭО	☐ ФОРМ	☐ РАД	LOT 240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ р 600 мм x 100 мм (белый)					 01.2023
Хранение и эксплуатация			 +5°C +40°C		 85%	 01.2028

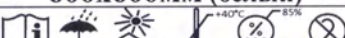
Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах 600х600мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»						
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.			Количество листов в упаковке		100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.					
	Производитель: ООО "Медгехника" 187021, Ленинградская обл. Тосненский муницип. район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком.1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru					
Методы стерилизации	ПАР	ПЕР	ЭО	ФОРМ	РАД	LOT 240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMS сп л 600х600мм (белый)					 01.2023
Хранение и эксплуатация						 01.2028


Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в рулонах 300ммх100м по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»						
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.			Количество в упаковке, шт		1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности. Производитель: ООО "МегаФоника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru					
Методы стерилизации	☐ ПАР	☐ ПЕР	☐ ЭО	☐ ФОРМ	☐ РАД	☒ LOT 240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMS сп р 300мм x 100м (белый)					 01.2023
Хранение и эксплуатация	     					 01.2028

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах 600х600мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные однокорпусные для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»						
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.			Количество листов в упаковке	100	
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.					
	Производитель: ООО "Медатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru					
Методы стерилизации	☐ ПАР	☐ ПЕР	☐ ЭО	☐ ФОРМ	☐ РАД	☒ LOT 240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMS стл 600х600мм (белый)					 01.2023
Хранение и эксплуатация	     					 01.2028

Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ® регулярь в листах 600х600мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ®						
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.				Количество листов в упаковке	100
Назначение	для упаковок медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.					
	Производитель: ООО «Мегатехника» 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Фёдоровское городское поселение, ГП Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru					
Методы стерилизации	ПАР	ПЕР	ЭО	ФОРМ	РАД	LOT 240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMS рл 600х600мм (белый)					 01.2023
Хранение и эксплуатация	     					 01.2028

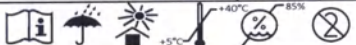
Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах 300мм x100мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке	1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ПЕР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMMMS стр 300мм x 100мм (белый)		
Хранение и эксплуатация			

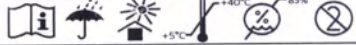
Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регулярь в рулонах 300ммx100мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество листов в упаковке	1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ПЕР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMMMS pp 300мм x100мм (белый)		
Хранение и эксплуатация			

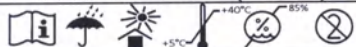Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах 300мм x100мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке	1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ПЕР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMMMS xp 300мм x 100мм (белый)		
Хранение и эксплуатация			

Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах 300ммx100мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество листов в упаковке	1
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ПЕР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	МН-СТЕРИМАГ SMMMS эр 300мм x100мм (белый)		
Хранение и эксплуатация			

Комбинированный комплект из 2-х материалов: первый материал: бумага крепированная стандартная, второй материал: материал нетканый SMS 900x900мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	креп стандарт/SMS 900 x 900мм		
Хранение и эксплуатация			

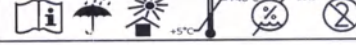Пакет комбинированный плоский ПТП-СТЕРИМАГ 60 x 150мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	ПТП-СТЕРИМАГ 60 x 150 мм		
Хранение и эксплуатация			

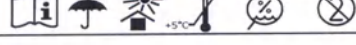Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСП-СТЕРИМАГ 60 x 150мм по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018 «Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий СТЕРИМАГ»			
Регистрационное удостоверение	РЗН 2019/8832 от 14.10.2021 г.	Количество в упаковке	100
Назначение	для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией, сохранения их стерильности с учетом заданных условий применения, хранения, транспортирования и срока годности.		
	Производитель: ООО "Мегатехника" 187021, Ленинградская обл., Тосненский муницип. район, Федоровское городское поселение, ГП Федоровское, ул. Промышленная, д. 18, ком. 1, т/ф: +7 (812) 508-88-50 mail@medtest.ru, www.medtest.ru		
Методы стерилизации	ПАР ЭО ФОРМ РАД	LOT	240123
Кодированное обозначение	ПСП-СТЕРИМАГ 60 x 150 мм		
Хранение и эксплуатация			

Пронумеровано и прошнуровано

136 (сто тридцать шесть листов)

Листа/ов

Ген. директор

Р.Г. Котченко

