

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

 Пашкевич К.И.

«24» 09 2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия
Лубрикант Intim in the city silicone
по ТУ 21.20.23-010-25074123-2021**

Регистрационное удостоверение..... № от

Назначение изделия

Лубрикант предназначен для нанесения на половые органы с целью их смазывания, увлажнения и устранения болезненных ощущений во время полового акта при недостаточной влажности слизистой влагалища или сухости влагалища.

Описание и принцип действия

Изделие представляет собой лубрикант (нестерильная, гелеобразная масса без цвета и запаха) упакованный в полимерную трубу, укупоренную резьбовым бушоном.

Эффективность изделия обусловлена его характеристиками и свойствами материалов, входящих в состав изделия.

Состав лубриканта: вода очищенная, глицерин, пропиленгликоль, гидроксипропилцеллюлоза, смесь диметикона и диметиконола, солюбилизатор, консервант.

Лубрикант состоит из увлажняющих и водоудерживающих ингредиентов (вода, пропиленгликоль, глицерин), загустителя (гидроксипропилцеллюлоза), солюбилизатора (полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурата), скользящей добавки (смесь диметикона и диметиконола), консерванта (1,2 - гександиол).

Загуститель образует пространственную сетку, которая связывает воду с растворенными в ней ингредиентами.

Солюбилизатор способствует растворению в воде скользящей добавки, которая способствует скольжению при коитусе.

Консервант подавляет рост и развитие микроорганизмов в лубриканте на протяжении всего срока годности изделия.

Туба эффективно защищает лубрикант от внешней среды при транспортировке и хранении.

Лубрикант создает тонкий смазывающий слой между половыми органами во время полового акта, увлажняет и предотвращает микроповреждения половых органов при недостаточной естественной влажности влагалища. Вязкоупругие свойства лубриканта снижают трение, способствуют скольжению при половом акте. В результате применения лубриканта улучшается качество интимной жизни женщины.

Показания к применению

Для увлажнения и смазывания слизистых оболочек влагалища в ходе полового акта.

Для облегчения введения полового члена при половом акте.

Для устранения болезненных ощущений и дискомфорта во время полового акта.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Побочные эффекты

При индивидуальной непереносимости материалов изделия возможны местные аллергические реакции.

Предупреждения

Не наносите лубрикант на поврежденную кожу.

Прекратите использование изделия при появлении раздражения.

Обратитесь к врачу, если раздражение продолжается.

Лубрикант не является контрацептивом и лекарственным средством.

Запрещается использовать лубрикант:

- хранящийся в тубе без колпачка;
- хранящийся в поврежденной тубе;
- через 6 месяцев после первого вскрытия тубы.

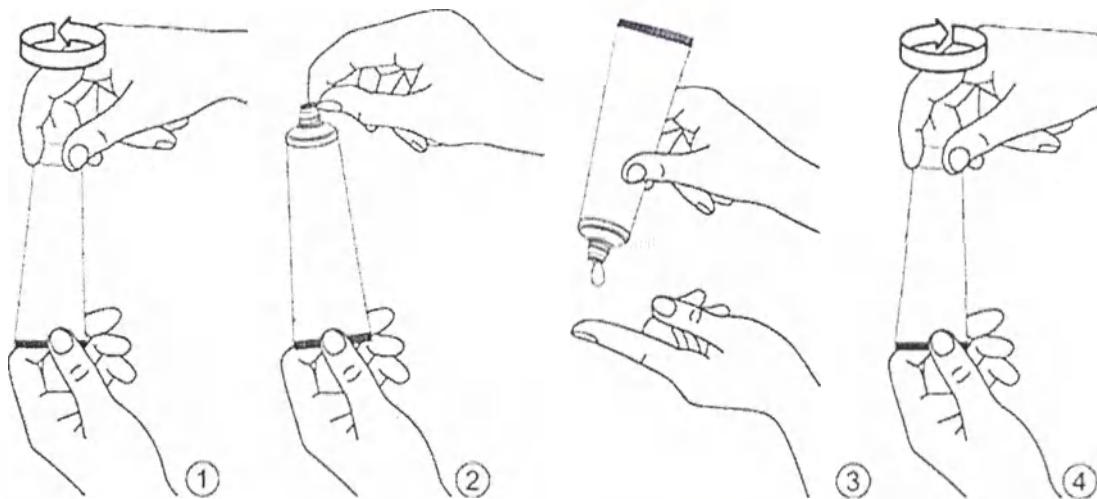
Храните изделие в местах недоступных для детей.

После полового акта желательно смыть лубрикант теплой водой.

Способ применения

Лубрикант рекомендуется наносить после проведения водных гигиенических процедур.

Перед первым применением изделия открутите колпачок тубы (1), снимите защитную мембрану с горла тубы (2). Выдавите необходимое количество лубриканта (3). Накрутите колпачок на горло тубы (4).



Нанесите лубрикант перед половым актом на преддверие влагалища, и/или на половой член партнера, и/или на анальное отверстие, и/или на используемый презерватив с внешней стороны.

Условия и особенности применения

Изделие отпускается без рецепта врача, применяется в домашних условиях. Извлеченный из тубы лубрикант применяется однократно.

Лубрикант легко смывается водой, совместим с презервативами из натурального латекса.

Комплектность поставки изделия:

Туба, содержащая 60 г лубриканта, инструкция по применению, картонная пачка.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления (номер партии и годен до см. на шве тубы).

Лубрикант можно использовать в течение 6 месяцев после снятия защитной мембраны с горла тубы.

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 25 °C до плюс 25 °C.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

Инструкция по утилизации

После использования лубриканта тубу, пачку выбросить в мусорное ведро. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Применению не подлежат и считаются пришедшими в негодность:

- изделия, которые хранились с нарушением условий хранения;
- изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Вышеперечисленные изделия подлежат утилизации в составе бытового мусора.

После использования лубриканта тубу, пачку выбросить в мусорное ведро. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

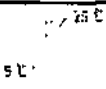
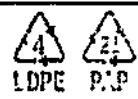
Применению не подлежат и считаются пришедшими в негодность:

- изделия, которые хранились с нарушением условий хранения;

- изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Вышеперечисленные изделия подлежат утилизации в составе бытового мусора.

Символы на упаковке:

Символ	Описание символа
	Символ указывает температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	Символ указывает, что перед применением изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
	Символы, содержат информацию для идентификации материалов тубы с бушоном, картонной пачки с целью их дальнейшей утилизации.
	Символ указывает срок годности лубриканта в тубе после ее вскрытия – 6 месяцев

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью Лаборатория «Биоритм»
(ООО Лаборатория «Биоритм»)

Россия, 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, соор. 19, офис 235

Тел. (343) 214-80-50

E-mail: info@bior.ru

...применено и пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа(ов).

Директор

ООО Лаборатория «Биоритм»

Пашкевич Казимир Иосифович

«27» 09 2021 года

