



Общество с ограниченной ответственностью
Лаборатория «Биоритм»

Россия, 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, соор. 19, офис 235
тел. +7 343 214-80-50, эл. почта: pto@bior.ru

ИНН/КПП 6660067933/668601001 ОГРН 1026604952241

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

Пашкевич К.И.

«23» мая 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия

Гель-лубрикант О'кей® для двоих по ТУ 21.20.23-003-25074123-2018

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8266 от 18 ноября 2021 года

Назначение изделия

Гель-лубрикант восполняет недостаток естественной смазки, дополнительно увлажняет, смазывает при ощущениях дискомфорта в начале и в ходе полового акта, вызванного вагинальной сухостью.

Описание

Изделие представляет собой нестерильную водорастворимую густую вязкую массу (гель) без цвета и запаха, которая помещена в тубу или пакет-саше.

Состав 1 г геля: глицерин – 150,0 мг, полиэтиленгликоль – 50,0 мг, гидроксизтилцеллюлоза – 11,0 мг, консервант (раствор метилпарабена, пропилпарабена, диазолидинил мочевины в пропиленгликоле) – 0,10 мг, вода – 779,0 мг.

Принцип действия и свойства

Эффективность изделия обусловлена его характеристиками и свойствами входящих в состав геля веществ.

В состав геля входят вода, водоудерживающие, ингредиенты (глицерин, полиэтиленгликоль) и загуститель (гидроксиэтилцеллюлоза). При половом акте гель восполняет недостаток естественной смазки, оказывает увлажняющее действие на слизистую половых органов, его вязкоупругие свойства улучшают скольжение и уменьшают трение. Он способствует осуществлению полового акта при возникновении проблем, связанных с сухостью влагалища: дискомфорт, затруднение проникновения во влагалище при половом акте, напряжения,

неприятные болезненные ощущения. Применение геля повышает качество интимных отношений. Консервирующая система поддерживает необходимую микробиологическую чистоту геля в первичной упаковке.

Показания к применению

Ощущения дискомфорта в начале и в ходе полового акта вызванные вагинальной сухостью, появления которой могут быть связаны с целым рядом причин:

- наступление менопаузы, изменение гормонального фона;
- приём оральных контрацептивов;
- стрессовые состояния;
- хронические заболевания (сахарный диабет, анемия);
- частые спринцевания;
- восстановление после терапии антибиотиками и противогрибковыми препаратами;
- после оперативных вмешательств (удаление яичников, матки);
- физиологические состояния, которые требуют дополнительного увлажнения.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов геля.

Побочные эффекты

При индивидуальной непереносимости компонентов геля возможны местные аллергические реакции.

Предостережения

Прекратите использование геля при появлении раздражения.

Гель не является контрацептивом и лекарственным средством.

Запрещается применять гель:

- хранившийся без накрученного на тубу колпачка;
- из поврежденной первичной упаковки;
- после истечения срока годности изделия, указанного на упаковке.


Способ применения

Гель рекомендуется применять после проведения водных гигиенических процедур. Перед нанесением геля вымойте руки с мылом.

Перед первым применением геля в тубе открутите колпачок тубы (рис.1), снимите защитную мембрану с горла тубы (рис.2). Закрутите колпачок (рис.3). Откройте крышку колпачка и выдавите необходимое количество геля. (рис.4)

Для вскрытия пакета-саше используйте насечку на боковом шве (рис.5). Выдавите из пакета необходимое количество геля (рис.6). После вскрытия пакет-саше подлежит утилизации.

Нанесите гель перед половым актом на преддверие влагалища и/или на половой член партнера, и/или на используемый презерватив с внешней стороны.

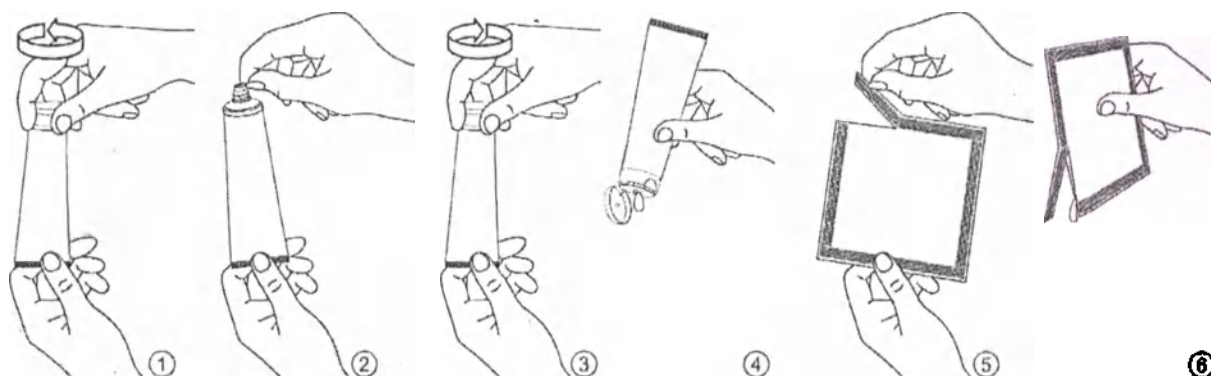

Условия и особенности применения

Изделие отпускается без рецепта врача, применяется в домашних условиях. Извлеченный из первичной упаковки гель применяется однократно.

Комплектность поставки вариантов исполнения изделия:

1. Туба, содержащая 100 г геля, инструкция по применению, картонная пачка;
2. Туба, содержащая 50 г геля, инструкция по применению, картонная пачка;
3. Туба, содержащая 25 г геля, инструкция по применению, картонная пачка;
4. 25 шт. пакетов-саше, содержащие по 4 г геля, инструкция по применению, картонная пачка.

Срок годности - 24 месяца (номер партии и годен до см. на шве тубы или пакета-саше). После снятия защитной мембраны с горла тубы гель можно использовать в течении 6 месяцев.

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 25 °С до плюс 25 °С.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Инструкция по утилизации

После использования геля тубу/ пакет-саше, пачку выбросить в мусорное ведро. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Применению не подлежат и считаются пришедшими в негодность:

- изделия, которые хранились с нарушением условий хранения;
- изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Вышеперечисленные изделия подлежат утилизации в составе бытового мусора.

Символы на упаковке:

Символ	Описание символа
	Символ указывает температурный диапазон, в котором медицинское изделие надежно сохраняется
	Символ указывает, что перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
	Символ содержит информацию для идентификации материала упаковки и возможности её утилизации
	Символ указывает срок эксплуатации изделия после вскрытия тубы

Производитель:

Российская Федерация,

ООО Лаборатория «Биоритм»

620091, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, соор. 19, оф. 235

Тел. (343) 214-80-50

