



«I certify»

- «9» February 2022

General Director Bernard Jahrman

Novodent SA, Switzerland

Y-Parc Technopole
Av. des Sciences 11
1400 Yverdon-les-Bains
Tél: +41 (0)24 524 28 28
Switzerland

OPERATING MANUAL

ON A MEDICAL PRODUCT

**"Orthopedic components for dental implantation: IMPLANTSWISS,
MONO IMPLANT, I-SYSTEM, in various options"**

2022

Novodent SA

Y-PARC Technopole, Avenue des Sciences 11 CH-1400 Yverdon -les Bains
Switzerland

Legalisation Nr 5'244.

On the basis of a comparison of signature, I ALEXIS de SELLERS,
Notary Public at Lausanne (Vaud - Switzerland) for the canton of Vaud,
hereby certify the authenticity of the signature apposed on the present
document by Bernard Robert JAHRMANN, with residence at Renens
(Vaud - Switzerland), who validly binds Novovend SA, in Yverdon-les-
Bains (Vaud - Switzerland), with his sole signature.
Lausanne, the tenth of February two thousand twenty two.



A. L.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**«Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO
IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»**

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия.....	3
2. Сведения о производителе медицинского изделия	3
3. Область применения медицинского изделия	3
4. Назначение	3
5. Показания к применению	3
6. Противопоказания	4
7. Побочные эффекты и меры предосторожности	4
8. Описание изделия	5
9. Способ (порядок) применения.....	249
10. Стерилизация	281
11. Сведения о комплектации, маркировке.....	281
12. Условия транспортировки и хранения медицинского изделия, срок хранения	284
13. Условия применения.....	285
14. Гарантия производителя	285
15. Технический ремонт и обслуживание.....	286
16. Перечень применяемых национальных и международных стандартов	286
17. Данные для утилизации или уничтожения медицинского изделия	290
18. Уполномоченный представитель в РФ	291
19. Состав медицинского изделия.....	291

1. Наименование медицинского изделия

«Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения».

Варианты наименования в технической документации – компоненты ортопедические, изделия, ортопедические изделия Implantswiss, протезные компоненты и т.д.

2. Сведения о производителе медицинского изделия

Разработчик: «Novodent SA», Y-PARC Technopole Avenue des Sciences 11 CH-1400 Yverdon-les-Bains («Новодент СА», И-ПАРК Технопол Авеню де Сьянс 11 CH-1400 г. Ивердон-ле-Бен), Швейцария.

Производитель: «Novodent SA», Y-PARC Technopole Avenue des Sciences 11 CH-1400 Yverdon-les-Bains («Новодент СА», И-ПАРК Технопол Авеню де Сьянс 11 CH-1400 г. Ивердон-ле-Бен), Швейцария.

Место производства: «Novodent SA», Y-PARC Technopole Avenue des Sciences 11 CH-1400 Yverdon-les-Bains («Новодент СА», И-ПАРК Технопол Авеню де Сьянс 11 CH-1400 г. Ивердон-ле-Бен), Швейцария.

Контактные данные производителя:

+41 24 524 28 28

info@implantswiss.com

3. Область применения медицинского изделия

В стоматологической практике: стоматология дентальная, имплантология, ортопедическая стоматология. Применяется врачами-ортопедами, врачами хирургами-имплантологами в области протезирования с применением зубной имплантации.

Потенциальные потребители – стоматологи ортопеды, зубные техники, хирурги.

4. Назначение

Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system показаны для использования с дентальными имплантатами для функциональной и эстетической реабилитации пациентов с полным или частичным отсутствием зубов.

5. Показания к применению

Отсутствие одного или нескольких зуба (ов) и связанная с этим необходимость установки ортопедической конструкции. Восстановление жевательных функций после потери зубов.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 3 из 344

6. Противопоказания

- Непригодность зубной полости к лечению;
- Недостаток костной ткани;
- Функциональные проблемы с прикусом;
- Альвеолярные заболевания кости;
- Пациенты, проходящие лучевую терапию челюстной кости;
- Ксеростомия;
- Болезни слизистой оболочки (витилиго, лишайник, стоматит);
- Акромегалия;
- Острый воспалительный процесс в месте оперирования;
- Беременность;
- Использование определенных лекарств (антикоагулянт, иммунодепрессант, бисфосфонат, кортикостероид и);
- Физический и умственный стресс;
- Психиатрические противопоказания;
 - Отказ пациентов сотрудничать;
 - Алкоголь и наркотическая зависимость;
 - Неврозы и психические расстройства;
 - Никотиновая зависимость;
- Метаболические расстройства (сахарный диабет);
- Гематологические нарушения;
- Сердечно-сосудистые нарушения;
- Метаболические нарушения в кости (незавершенный остеогенез, менопаузы, остеопороз, остеонит)
- Нарушения коллагеновых структур (склеродермия, ревматоидный артрит)

7. Побочные эффекты и меры предосторожности

Побочные эффекты:

- Временные симптомы: боль, отек, фонетические расстройства и воспаление десен.
- Более стойкие симптомы: хроническая боль, связанная с установкой имплантатов, постоянная парестезия и дизестезия, повреждение гребня альвеолярного отростка верхней/нижней челюсти, локальная или системная инфекция, ороантральные или ороназальные фистулы, необратимо поврежденные соседние зубы, перелом имплантата, челюсти, кости или протеза, эстетические проблемы, повреждение нервов, экфолиация и гиперплазия.

Меры предосторожности:

- Компоненты ортопедические Novodont, применяются только в сочетании с соответствующими дентальными имплантатами Novodont.
- Изделия поставляются нестерильными и должны быть простерилизованы перед использованием.

8. Описание изделия

В стоматологических имплантационных системах, производимых Novodent, имеются различные Компоненты ортопедические, помогающие достичь оптимальной гибкости и удобства при протезировании.

8.1 Абатменты

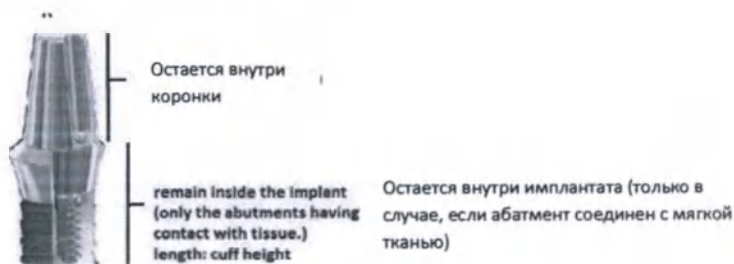
Абатменты и винты обеспечивают связь между эндооссальным креплением и протезной частью, которая образует супраструктуру и позволяет жевать.

Система абатментов состоит из временного (temporary) и окончательного абатментов, абатментных винтов и заживляющего защитного колпачка. Абатмент обеспечивает связь между зубным имплантатом и протезной реставрацией, которая восстанавливает жевательную функцию. Постоянные абатменты находятся либо на уровне костной ткани, либо на уровне мягкой ткани и доступны в нескольких конструкциях, описанных ниже в таблице.

Абатмент на уровне Костной ткани



Абатмент на уровне Мягкой ткани



8.2 Лабораторные аналоги

Аналог предназначен для закрепления в слепке. В зависимости от системы имплантатов, это осуществляется путем прикрепления или зажима. Каждый аналог можно в любой момент вынуть из модели. Применяется для изготовления моделей. Специальная форма предотвращает макро- и микроподвижность, возникающую во время фрезеровки, при минимальном внешнем диаметре, не препятствующем изготовлению разборных моделей.

Аналог имплантата используется при изготовлении моделей в лаборатории для дублирования формы и положения нескольких имплантатов.

8.3 Трансферы

Трансферы служат для точной передачи на рабочую гипсовую модель расположения и наклона импланта в полости рта, чтобы выбрать абатмент, соответствующий клиническому случаю и требованиям стоматолога. Используется при реставрациях зубных рядов в

целях повышения точности. Аналогичный результат позволяет получить хирургический шаблон.

8.4 Колпачки

Используются для снятия оттискового слепка с трансферов для закрытой ложки

8.5 Балки

Балка - горизонтальный элемент несущей конструкции, перекрывающий проемы. Балки принимают нагрузку от вышележащих элементов и равномерно распределяют ее между опорами. Балочное протезирование применяется при сочетании незначительных дефектов концевой и переднего отдела, боковых и концевых дефектов, для коррекции обширных дефектов бокового отдела. При полном отсутствии зубов условно-съемное протезирование – один из распространенных вариантов восстановления функции зубного ряда.

8.6 Винты

Винты идут в комплекте к ортопедическим элементам и служат для фиксации ортопедических конструкций.

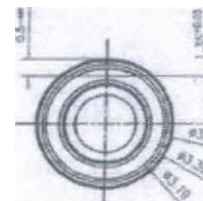
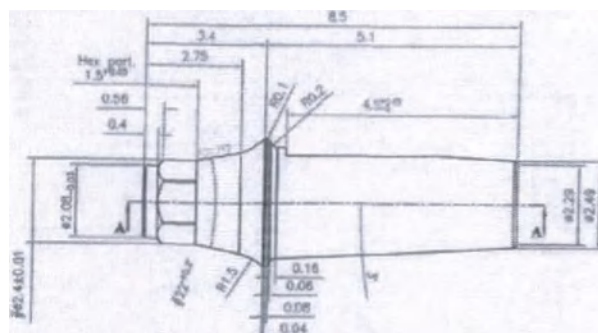
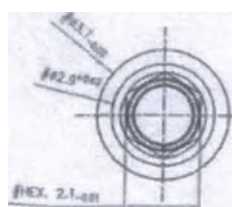
средний срок службы постоянно устанавливаемых компонентов после имплантации системы 15 лет.

Технические характеристики: сведения о размерах, формах и типах резьбы ортопедических элементов подробно предоставлены в прилагаемых ниже чертежах. На изделия, к которым отсутствуют чертежи, представлены подробные описания их характеристик.




Все размеры указаны в миллиметрах.

Допуски для размеров, если иное не указано на чертеже, мм: $<6,0 - \pm 0,05$; $>6,0-30,0 - \pm 0,1$; $>30,0-120,0 - \pm 0,15$.




I. Абатменты:



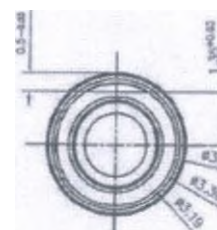
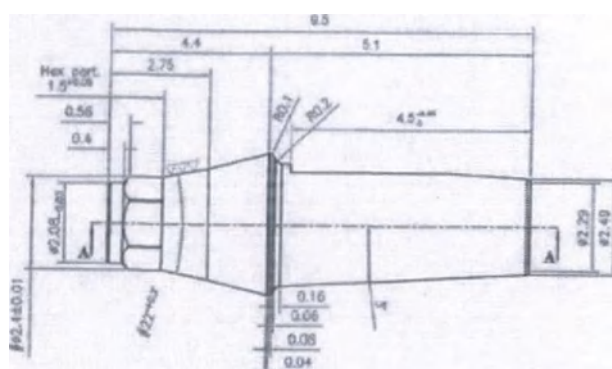
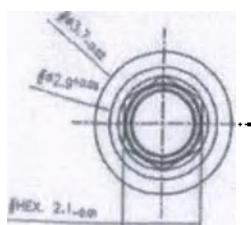
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3710)



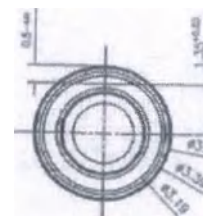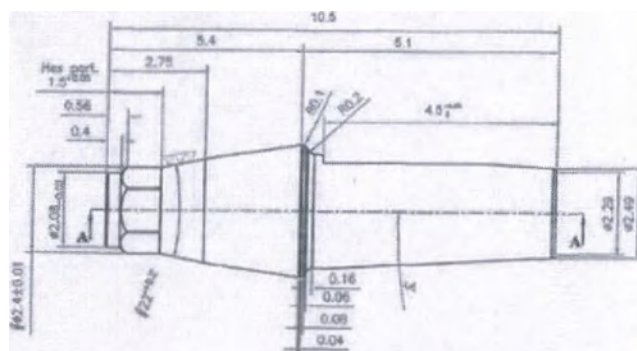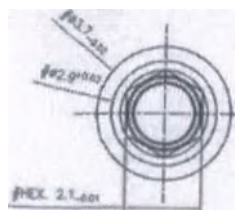
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3720)



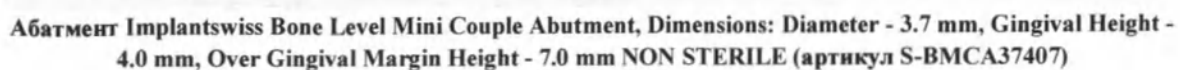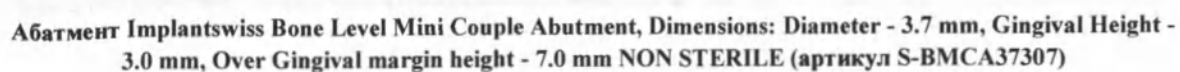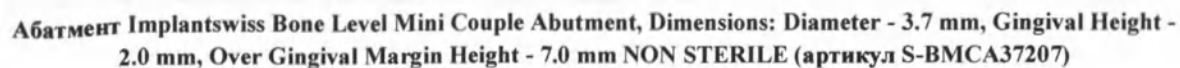
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3730)




Страница 9 из 344

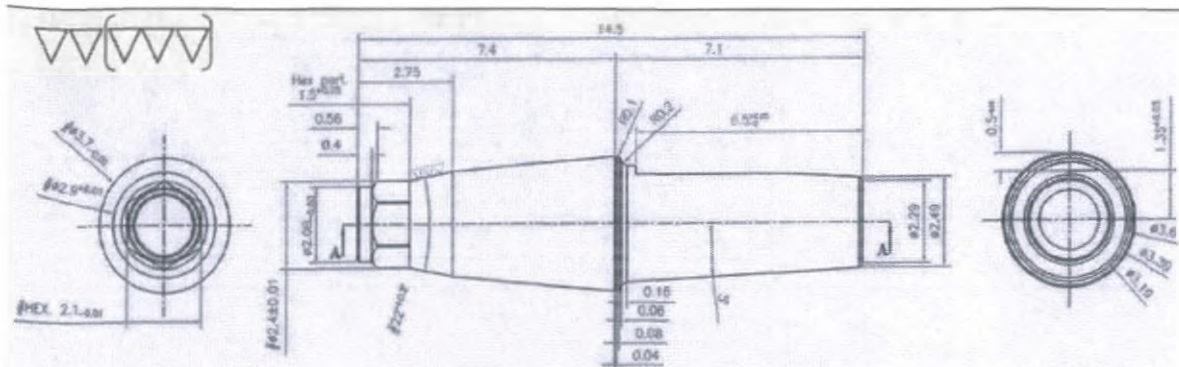



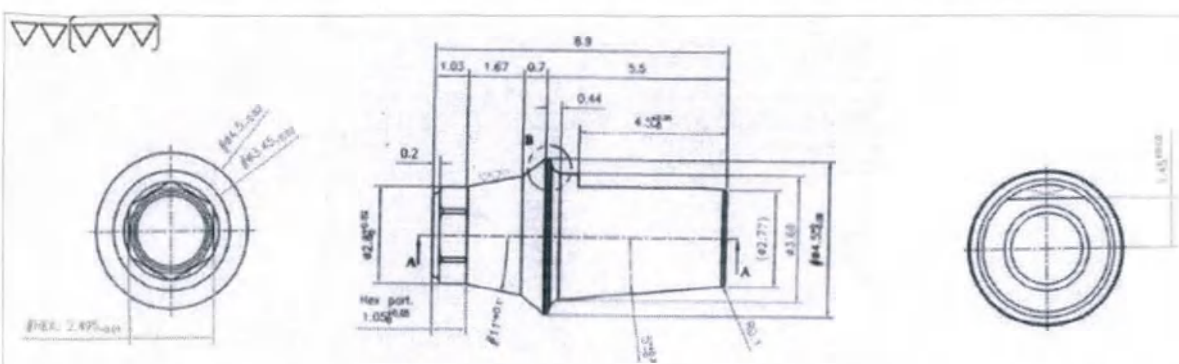
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA37507)



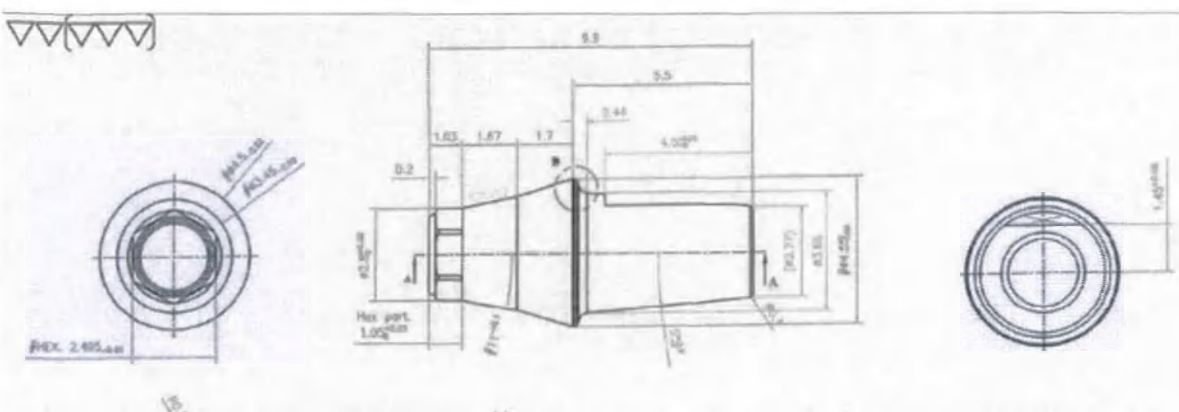
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4510)



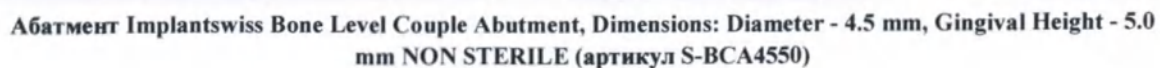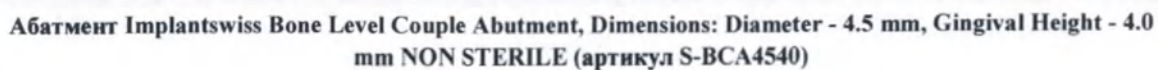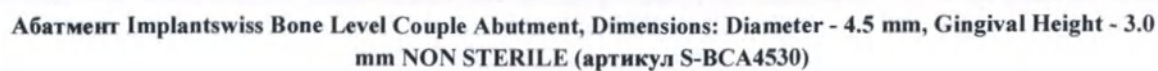
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4520)




Страница 11 из 344

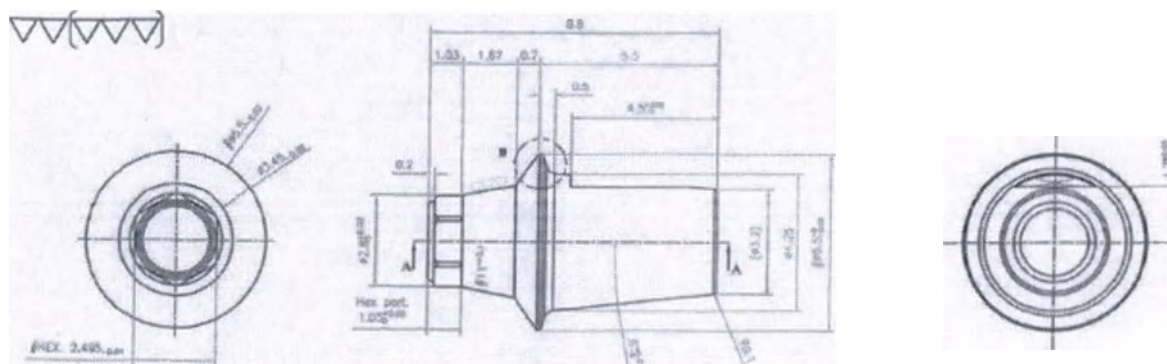



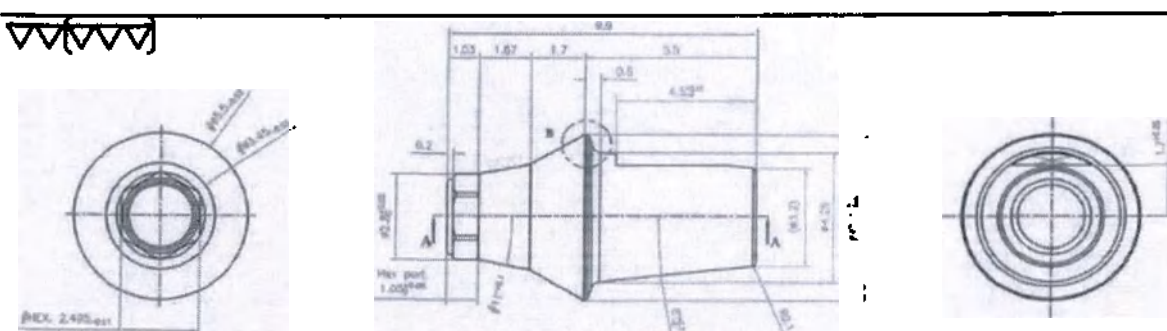
A6armeur Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (арткул S-BCA5510)





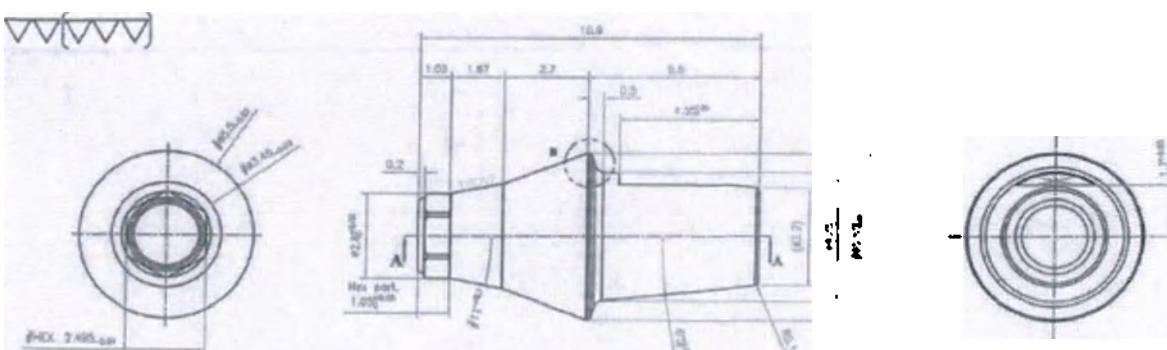
A6armeur Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (арткул S-BCA5520)



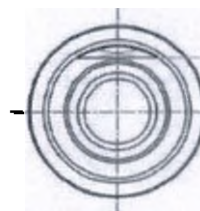
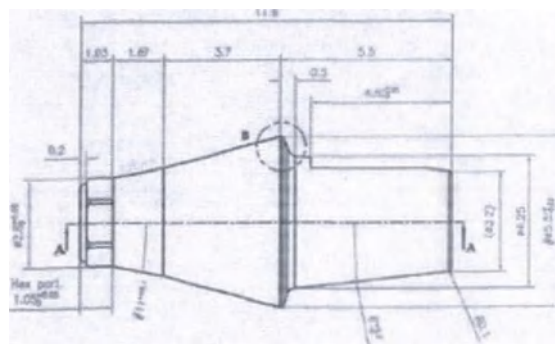
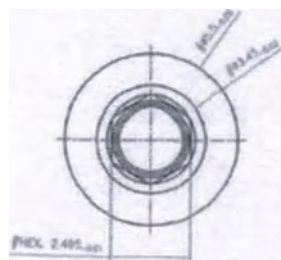
A6armeur Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (арткул S-BCA5530)



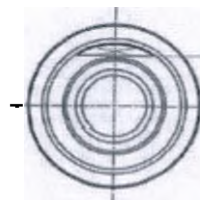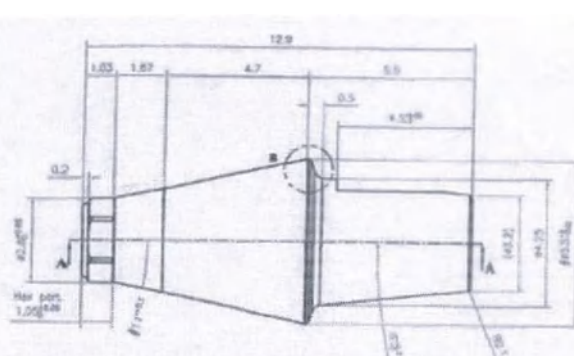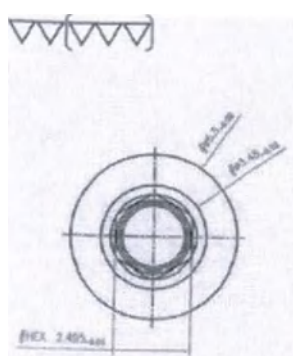
Abutment Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5540)



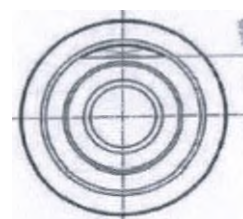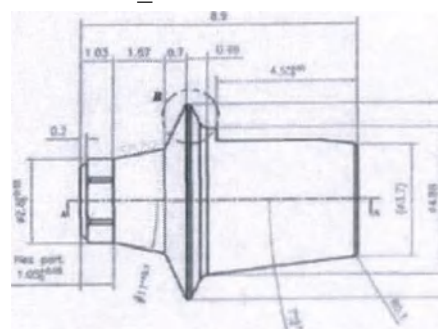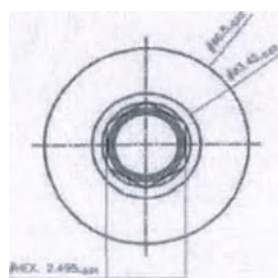
Abutment Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5550)



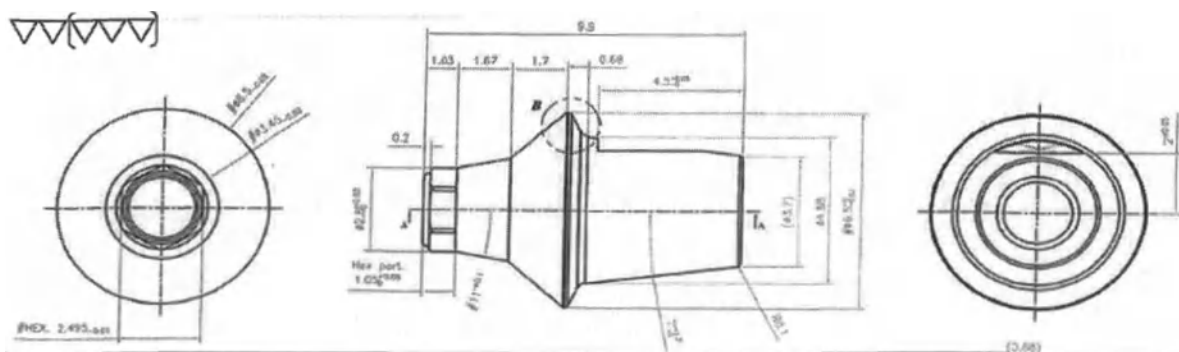
Abutment Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6510)



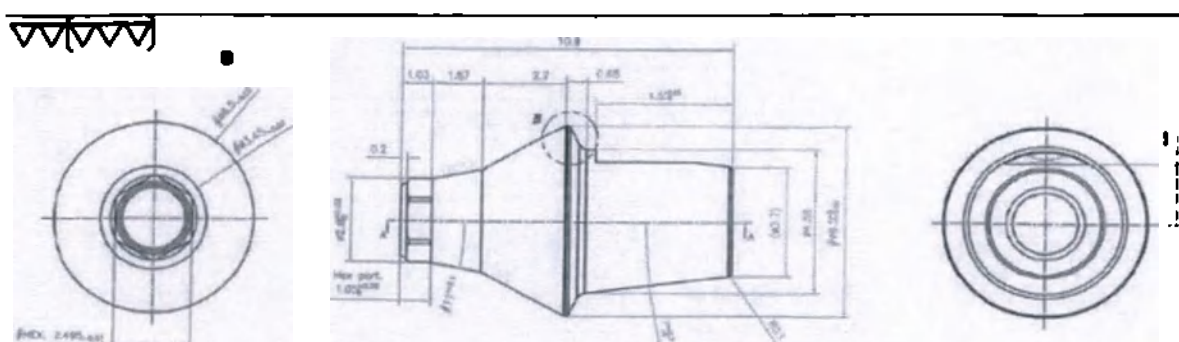
Абютмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (арткул S-BCA6520)



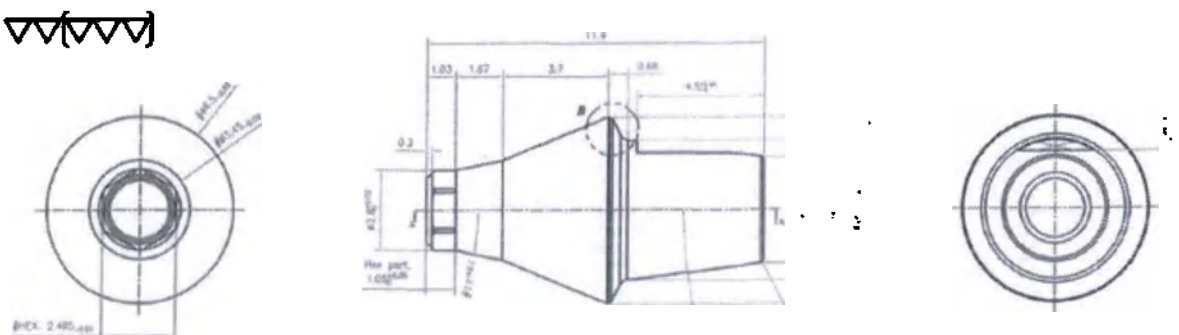
Абютмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (арткул S-BCA6530)



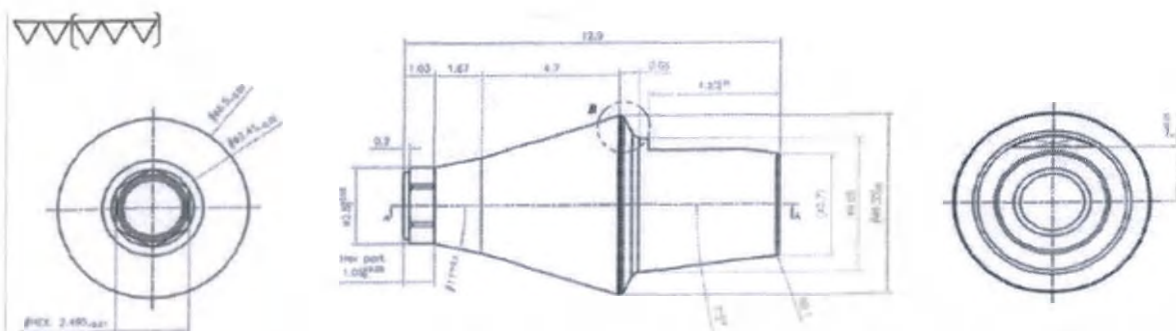
Абютмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (арткул S-BCA6540)





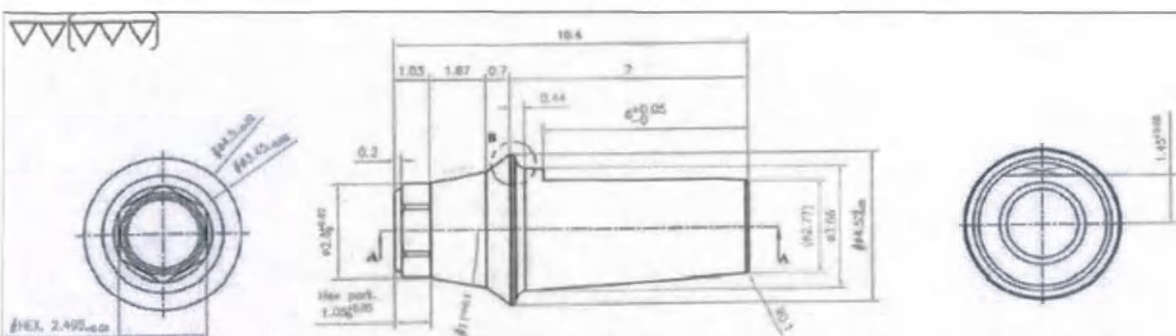
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6550)











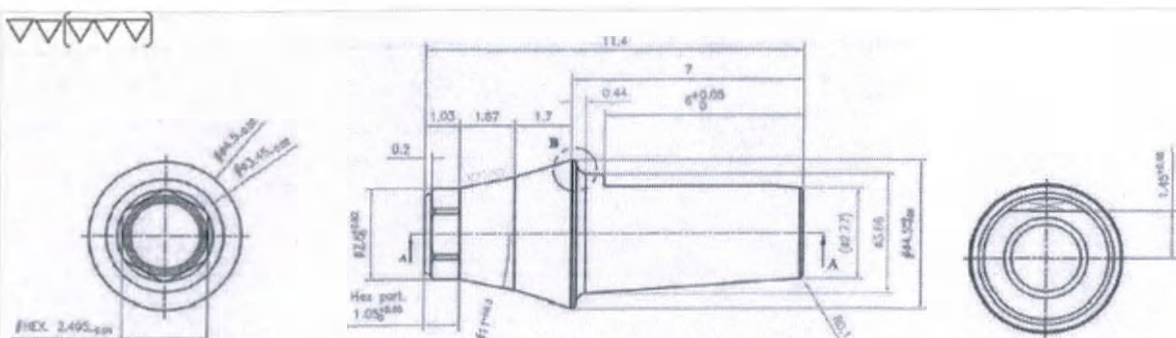
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45107)



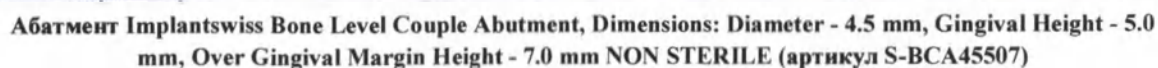
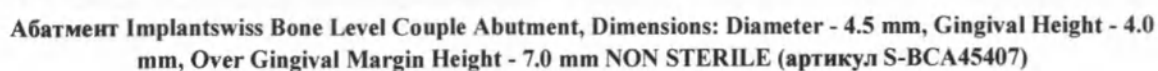
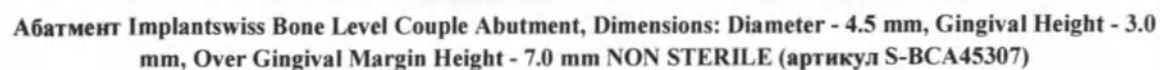
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45207)









Страница 16 из 344

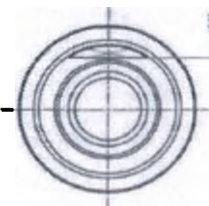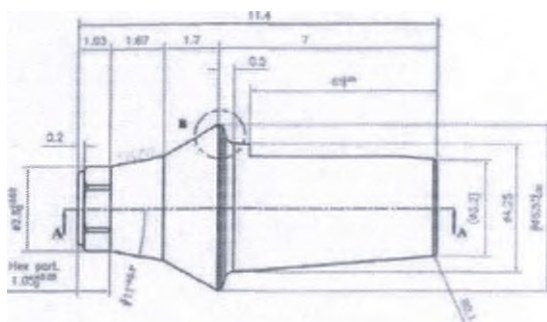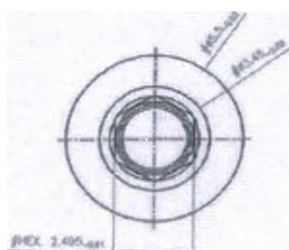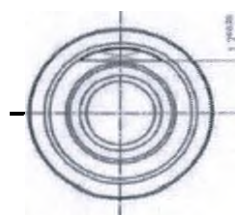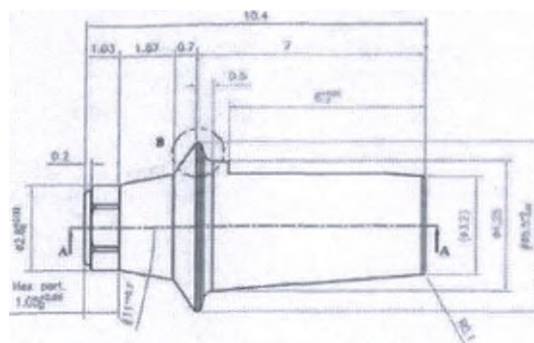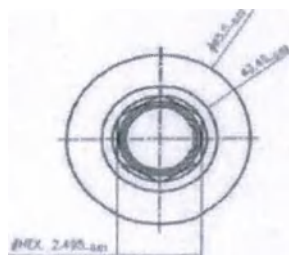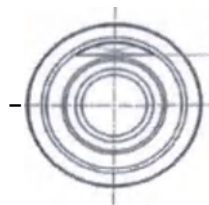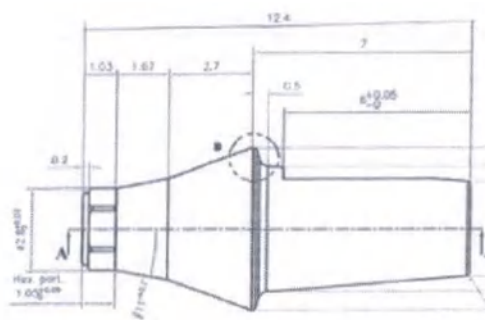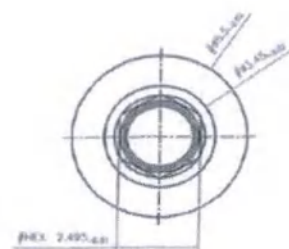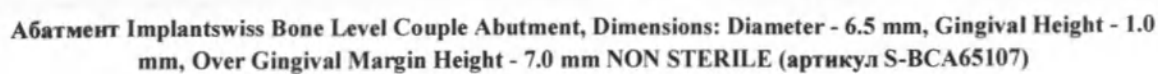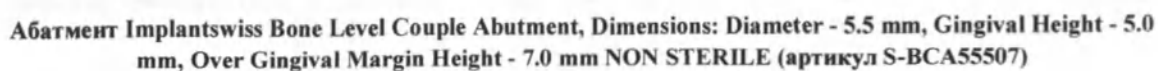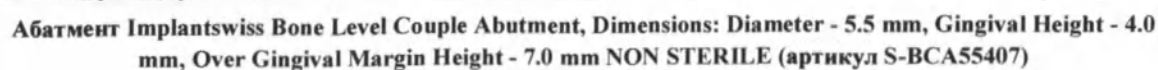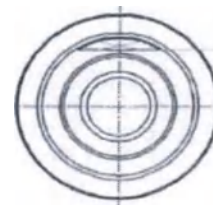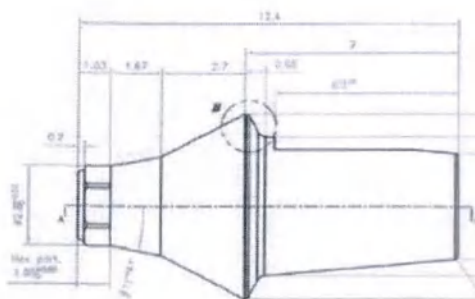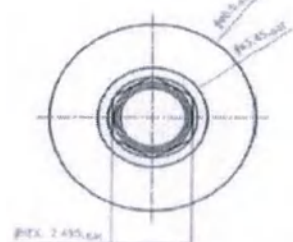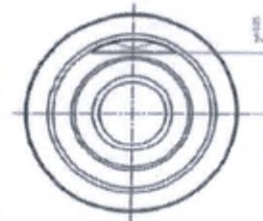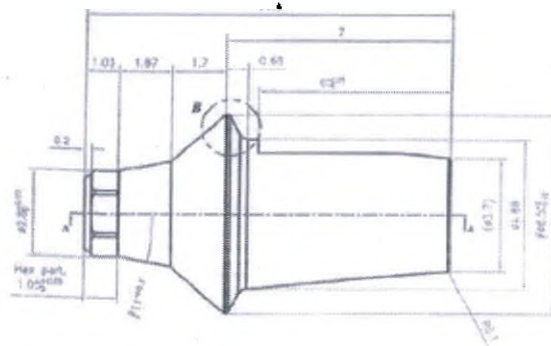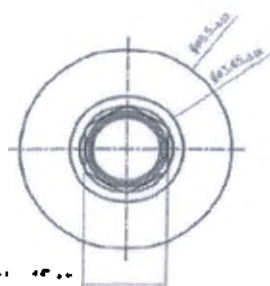
$$\nabla \nabla (\nabla \nabla \nabla)$$


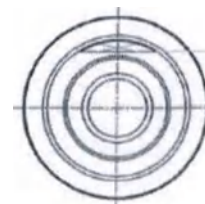
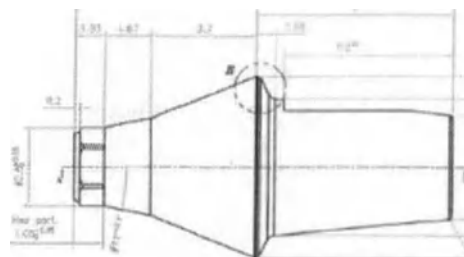
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




Страница 18 из 344




▽▽▽▽▽



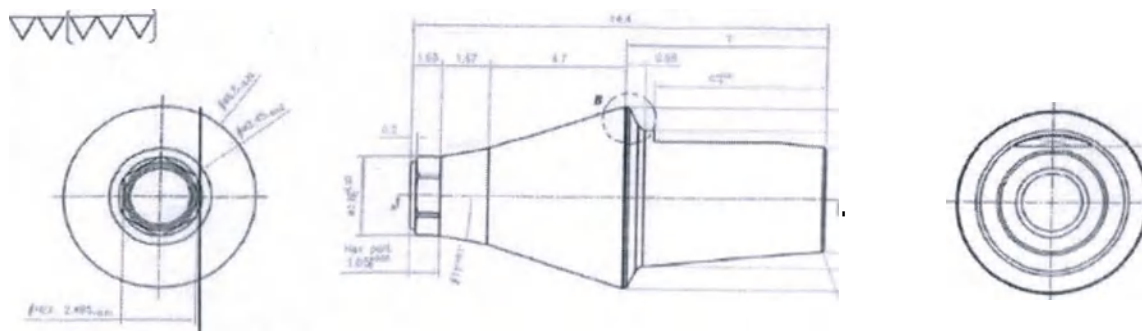
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: имплантат, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах установки»




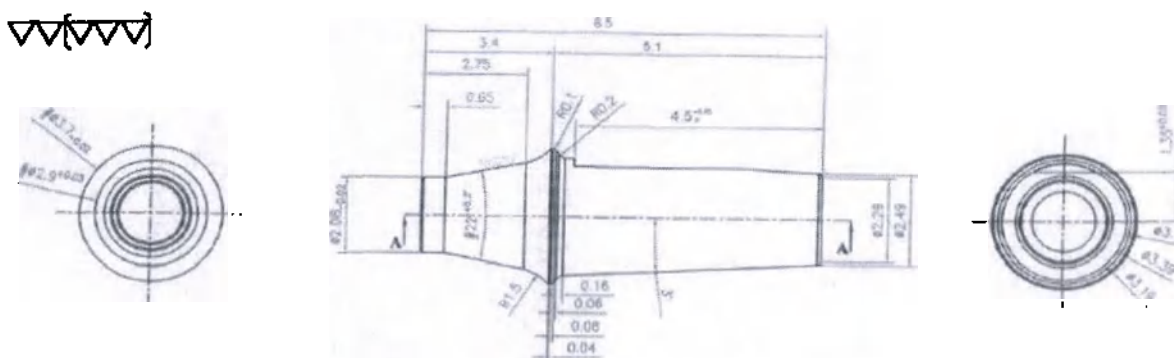
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA65507)





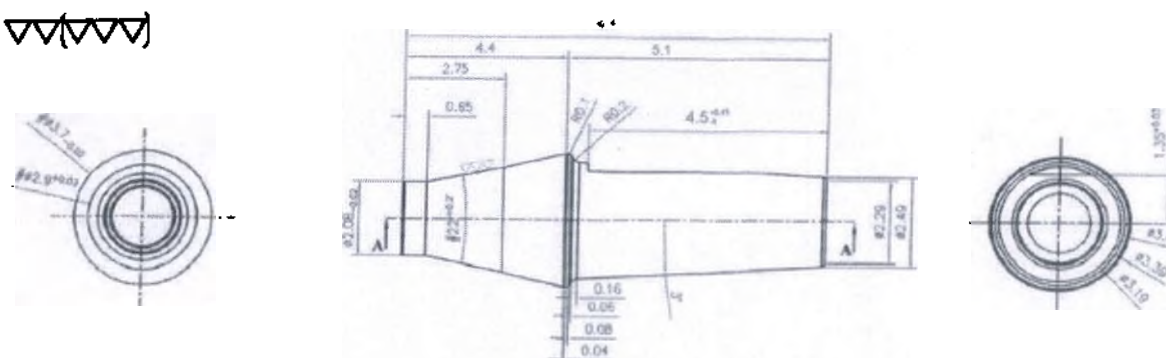
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3710)



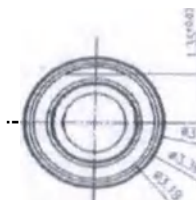
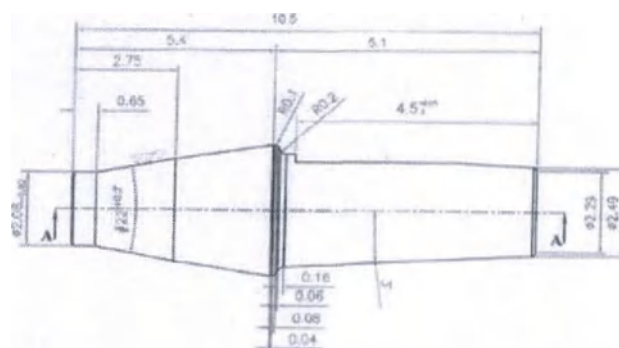
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3720)



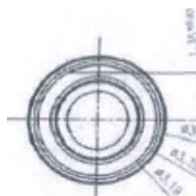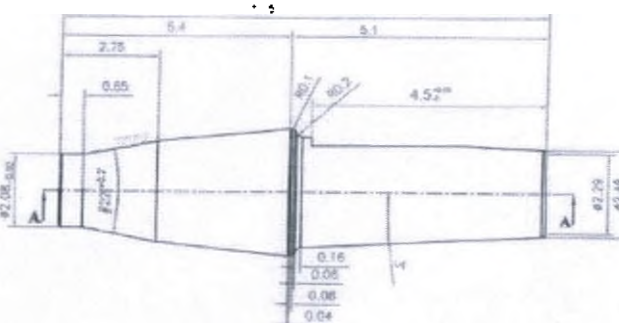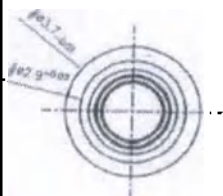
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3730)



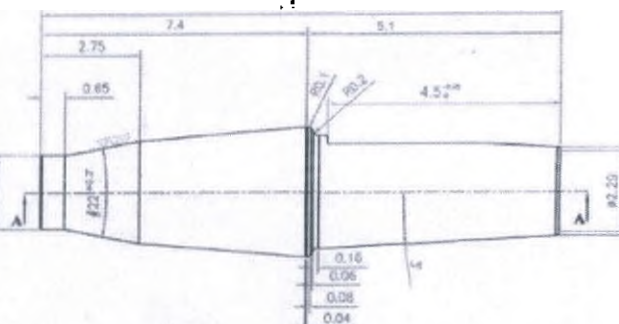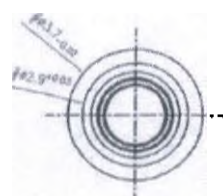
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3740)



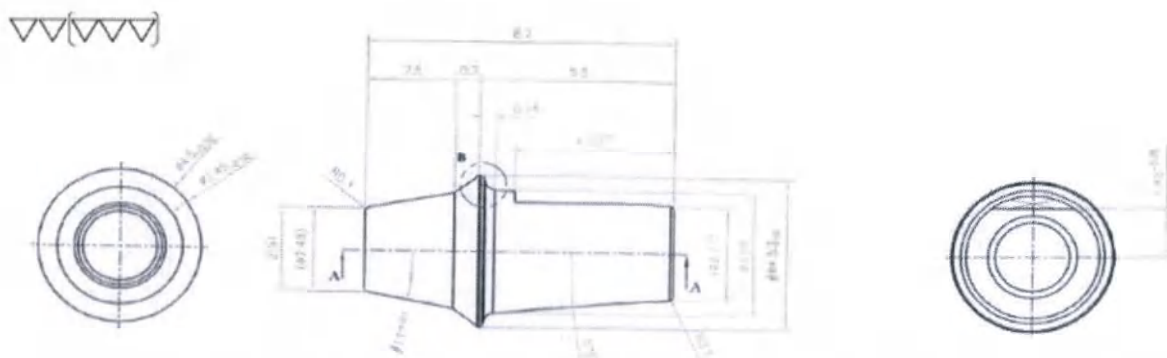
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3750)



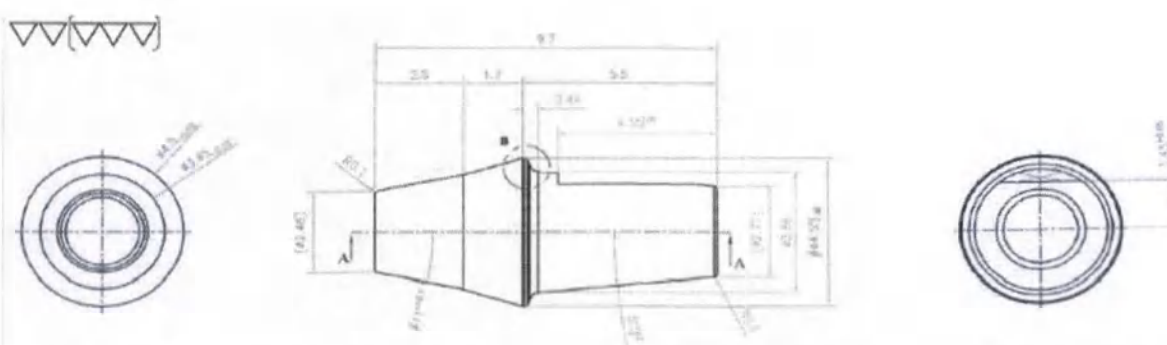
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4510)



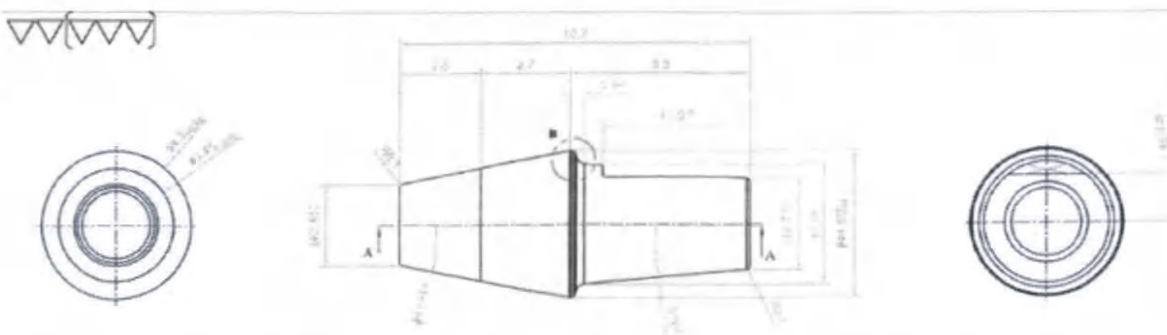
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4520)



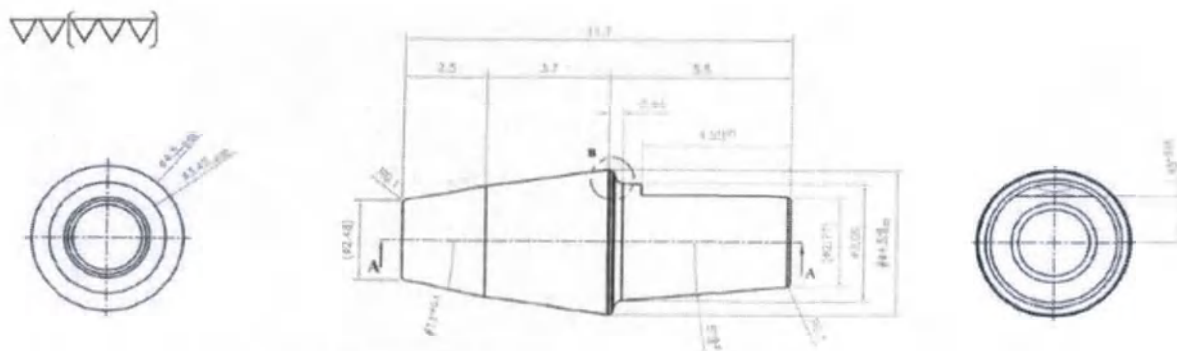
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4530)











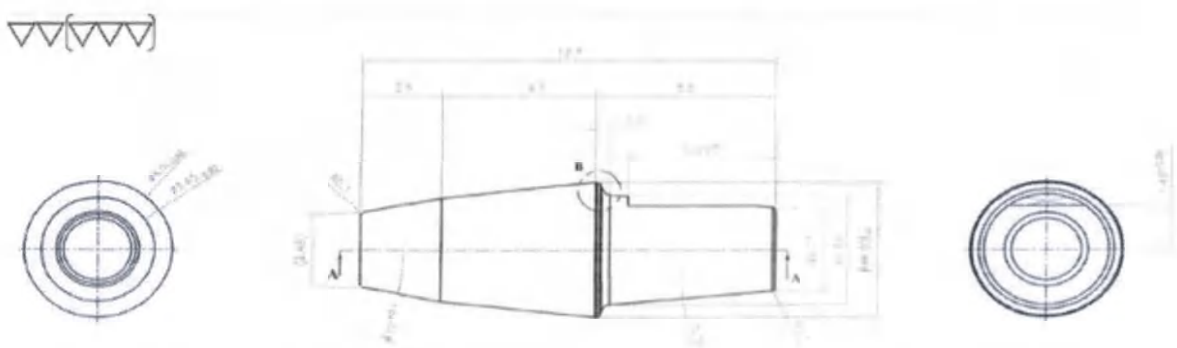
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4540)









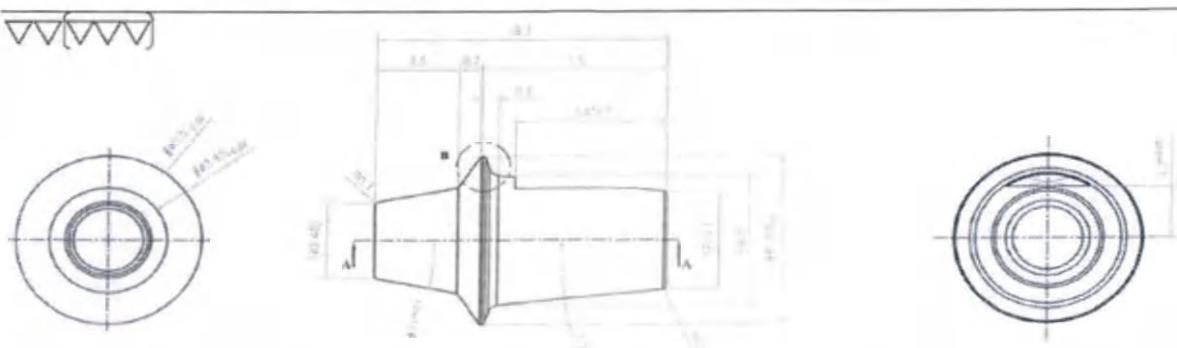
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4550)



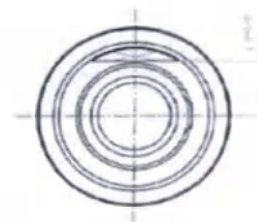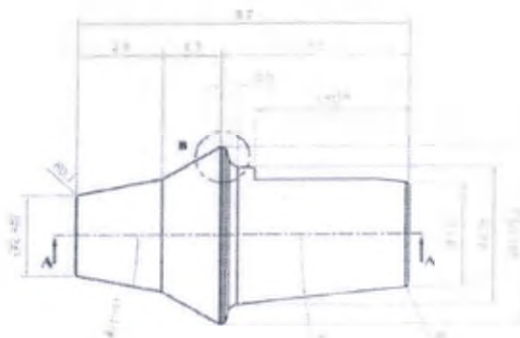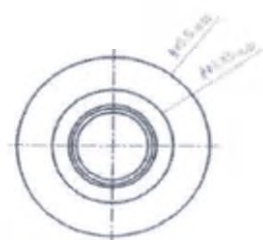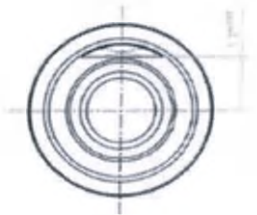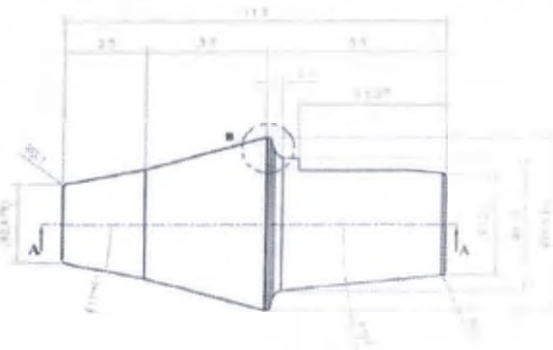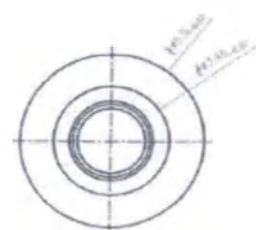
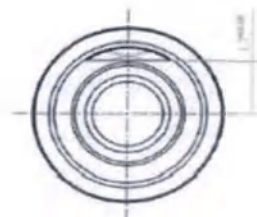
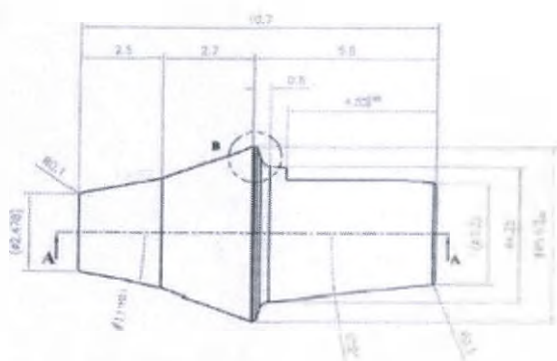
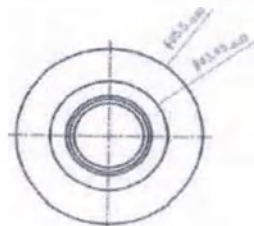
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN5510)

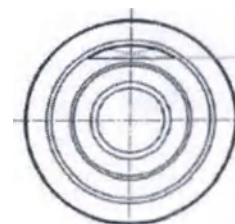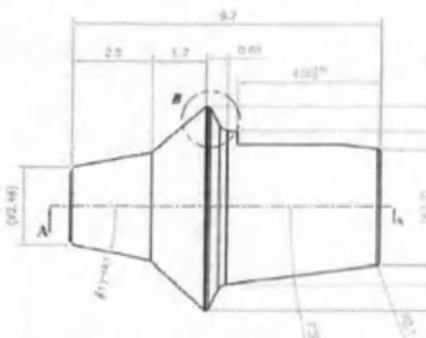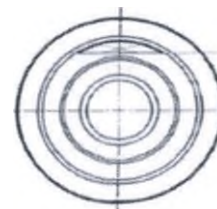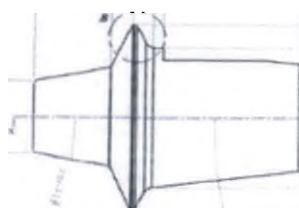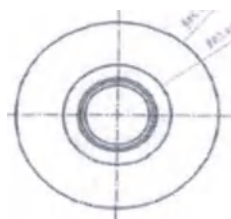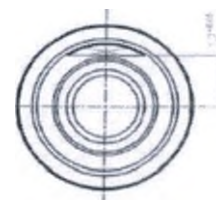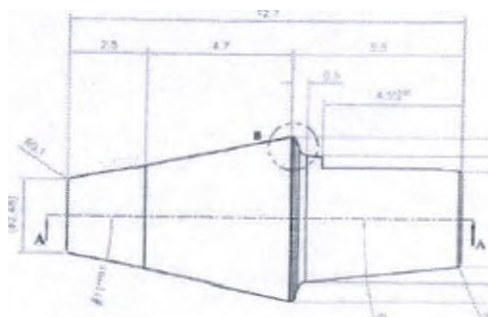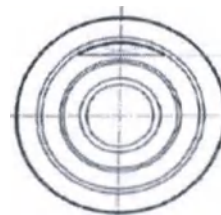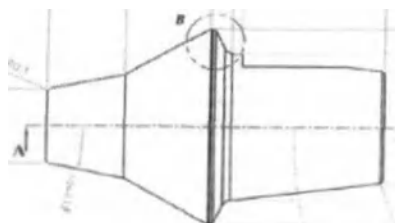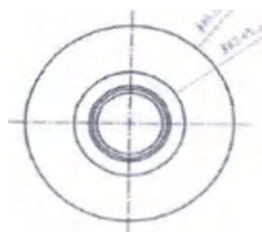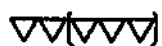
$$\nabla \nabla (\nabla \nabla \nabla)$$


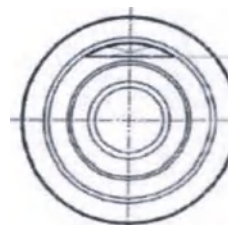
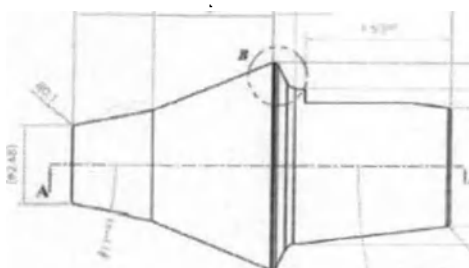
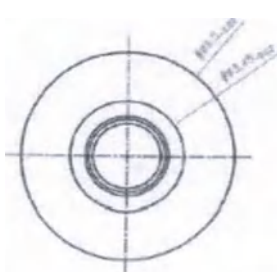
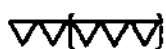
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»






Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6530)



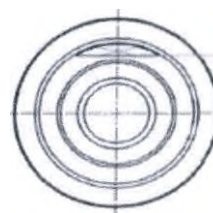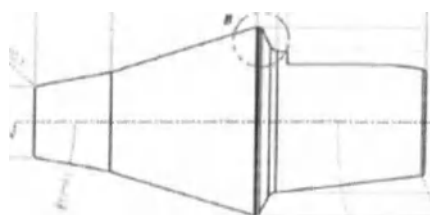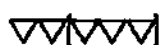
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6540)



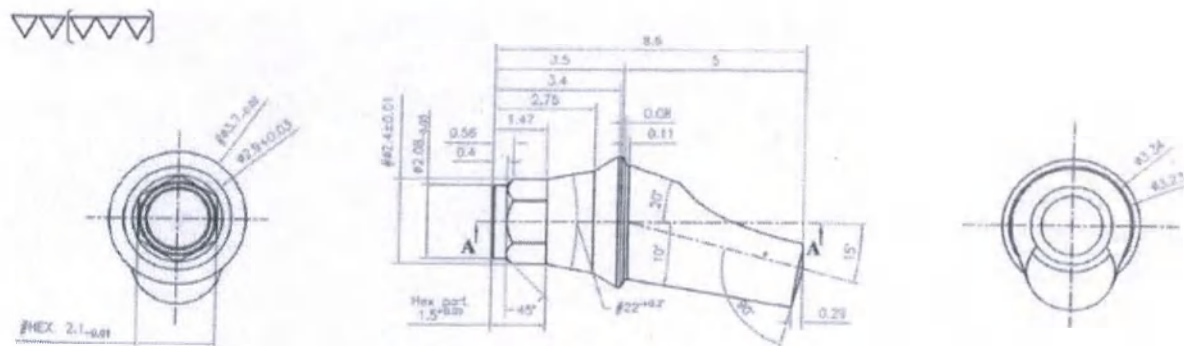
Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6550)



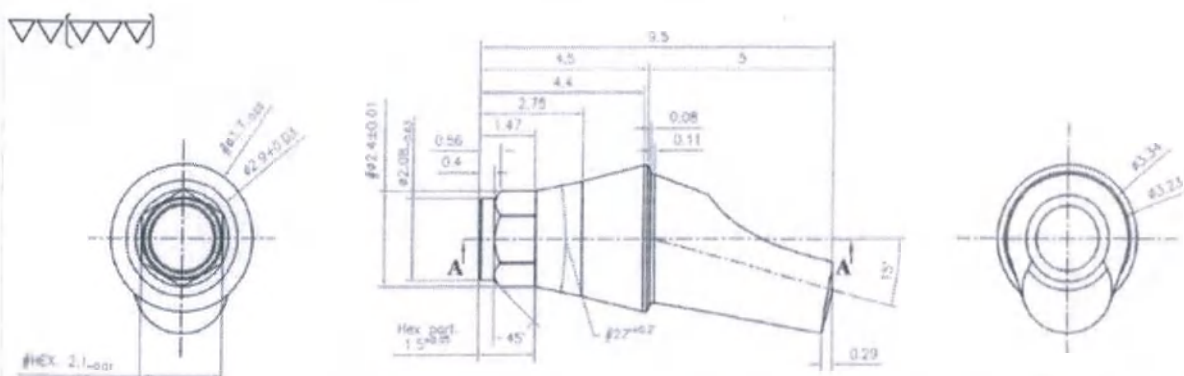
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAA37151)



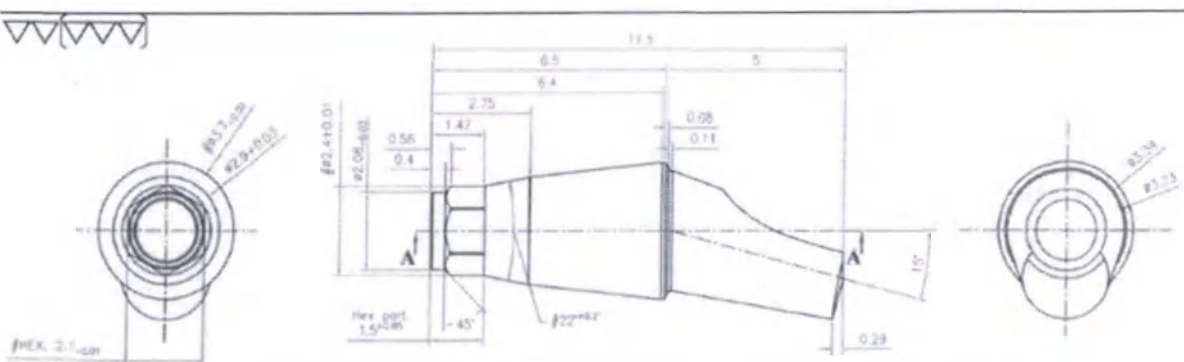
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAA37152)



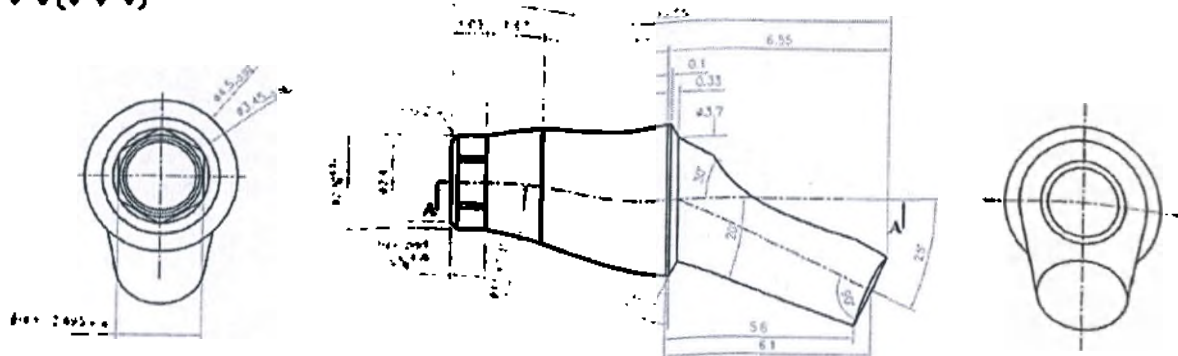
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAA37154)



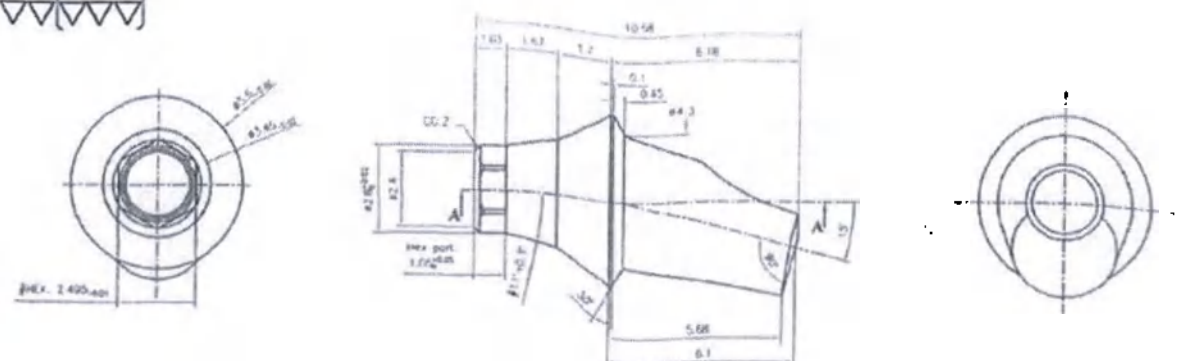
A6armenr Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA45254)



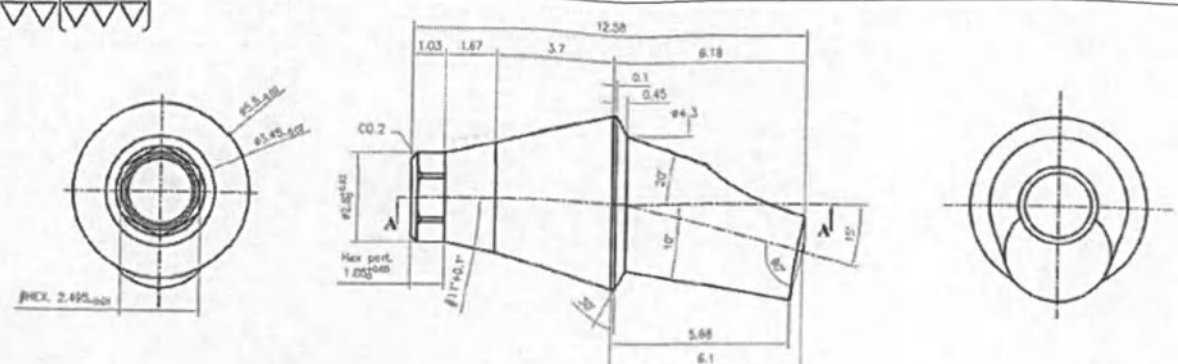
A6armenr Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55152)



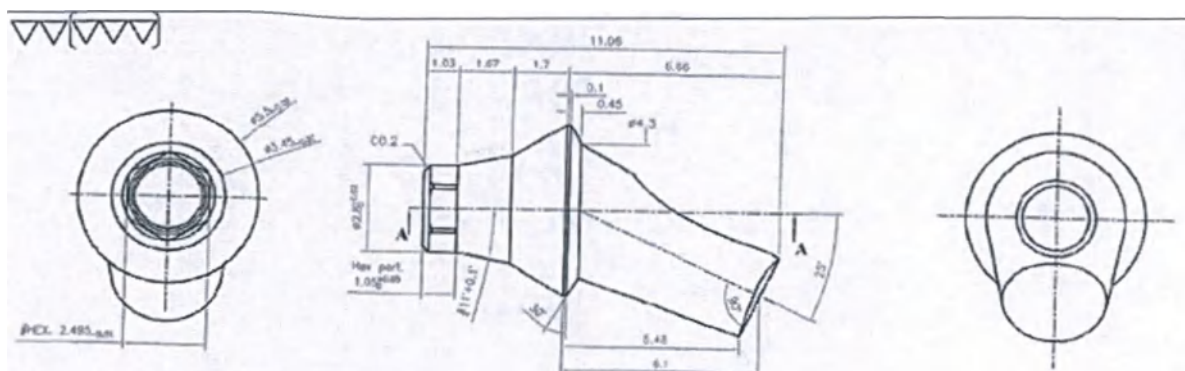
A6armenr Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55154)




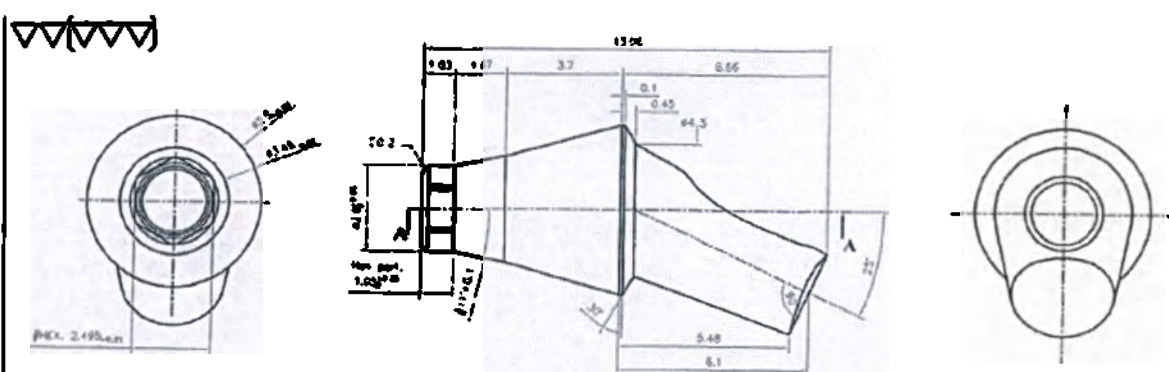
Abartment Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55252)





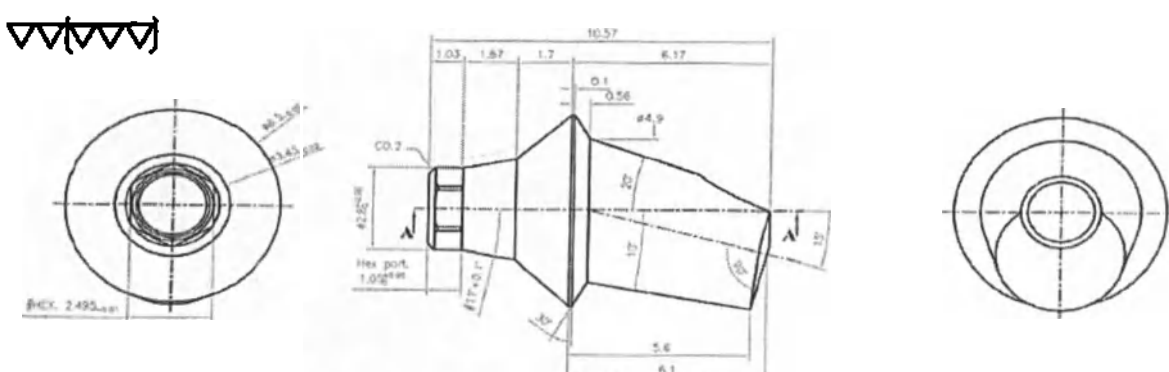
Abartment Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55254)




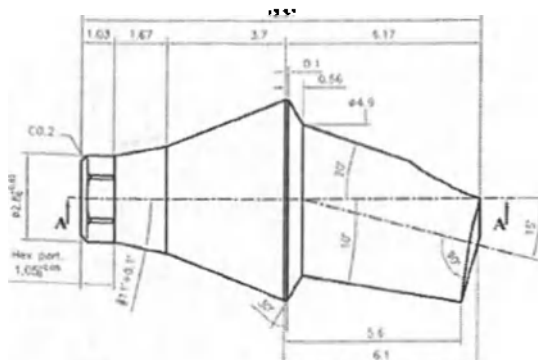
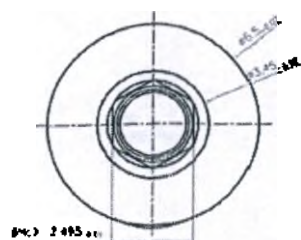
Abartment Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA65152)



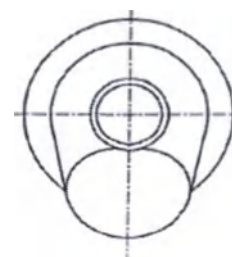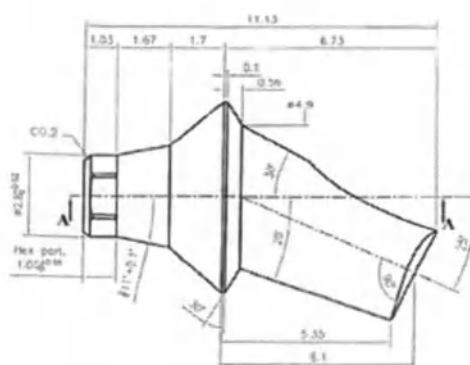
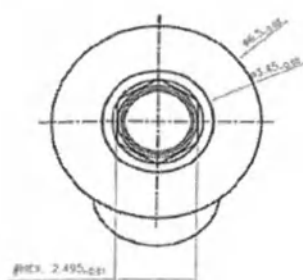
Абютмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (арткул S-BAA65154)



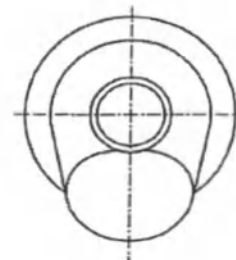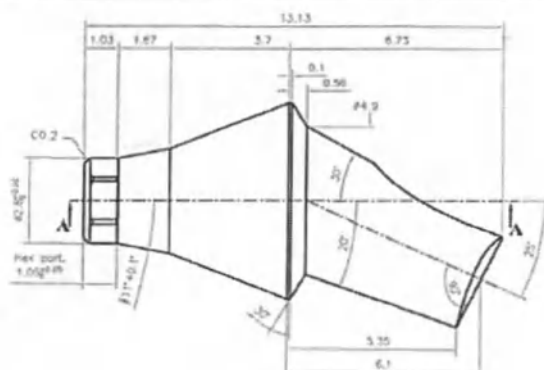
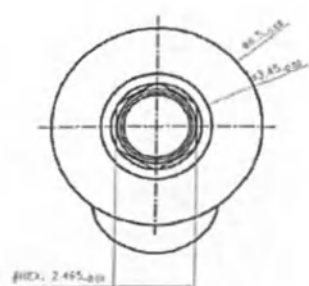
Абютмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (арткул S-BAA65252)



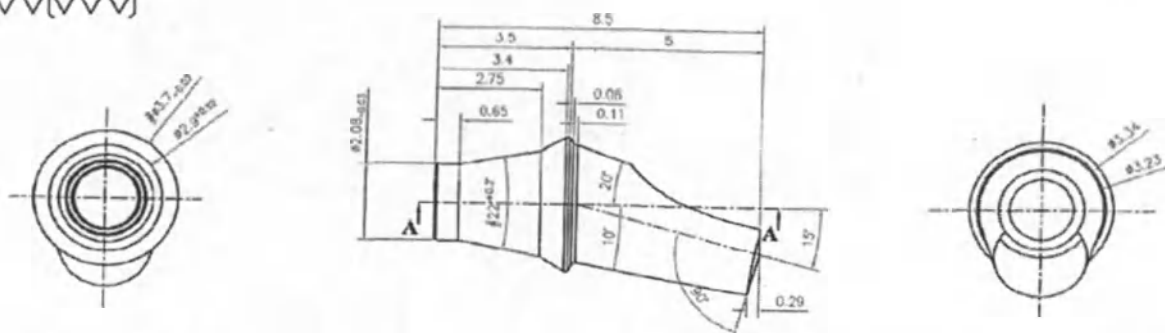
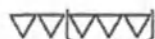
Абютмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (арткул S-BAA65254)



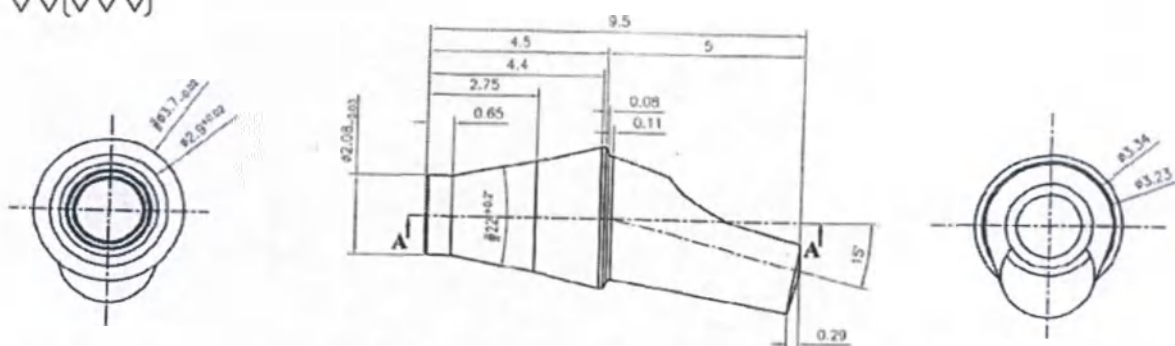
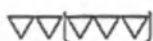
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAAN37151)




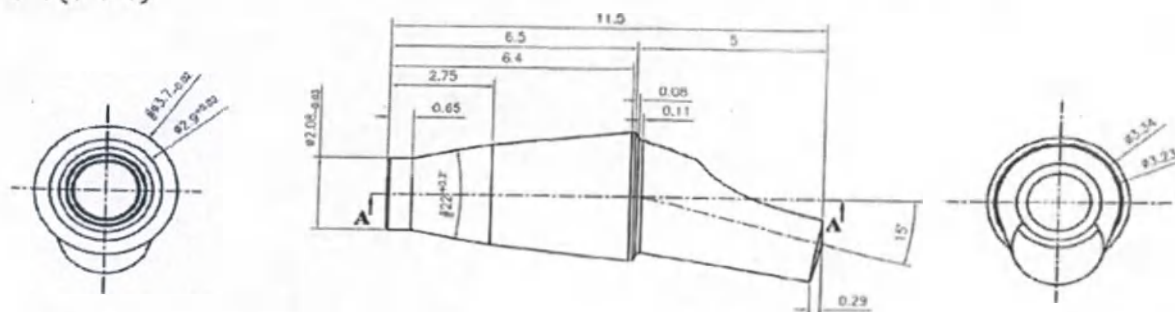
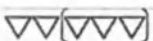
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAAN37152)




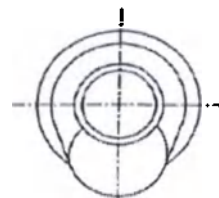
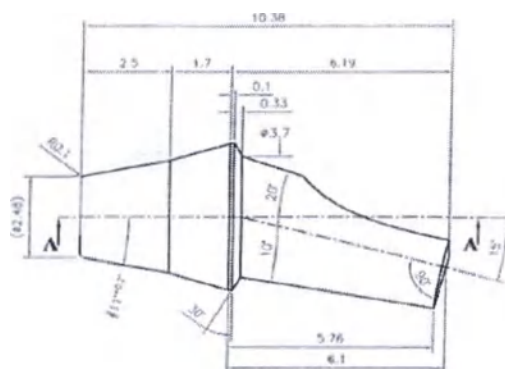
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAAN37154)



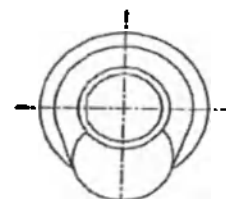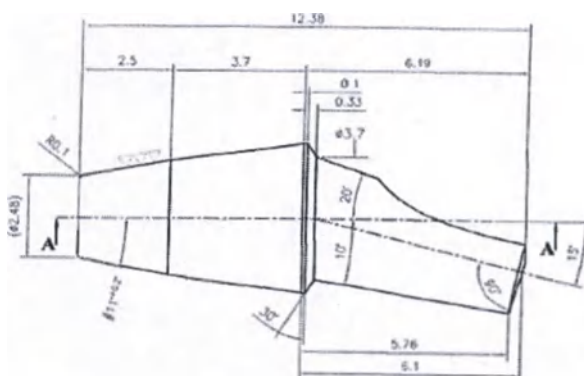
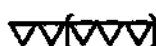
Абютмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артрикул S-BAAN45152)



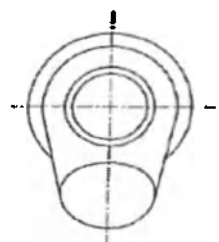
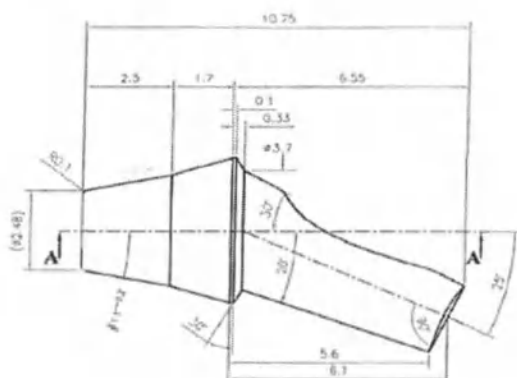
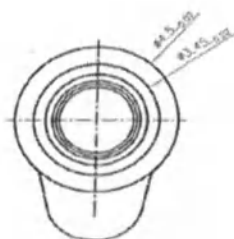
Абютмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артрикул S-BAAN45154)




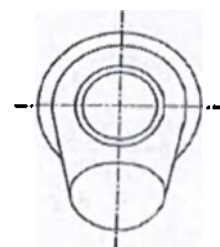
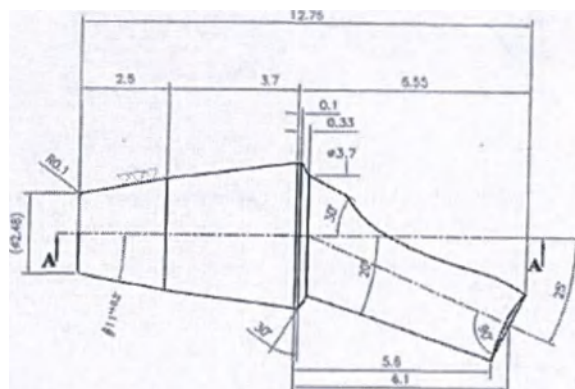
Абютмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артрикул S-BAAN45252)




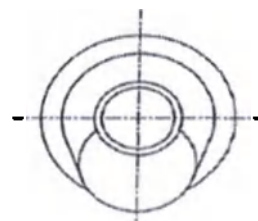
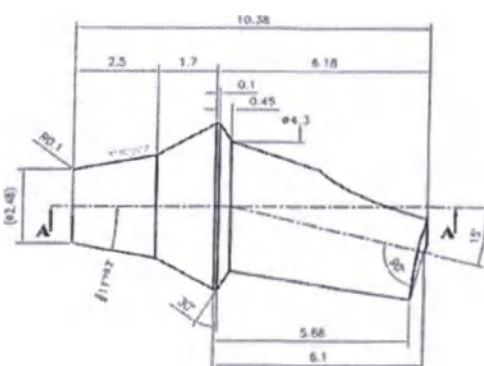
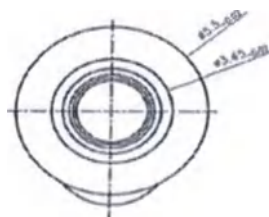
Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (апрӯк S-BAAN45254)



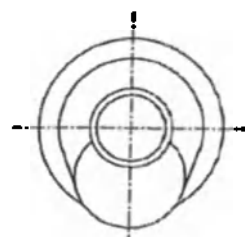
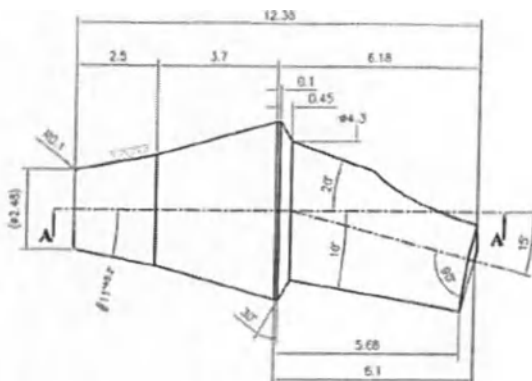
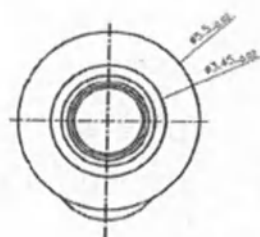
Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (апрӯк S-BAAN55152)



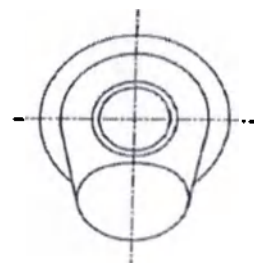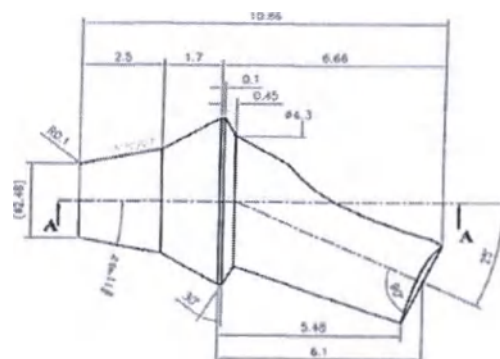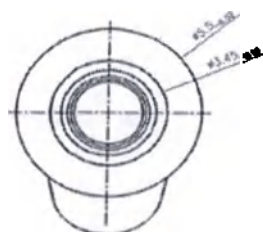
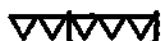
Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (апрӯк S-BAAN55154)



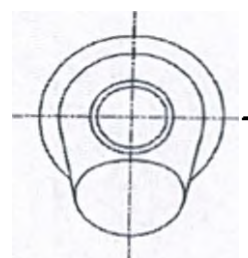
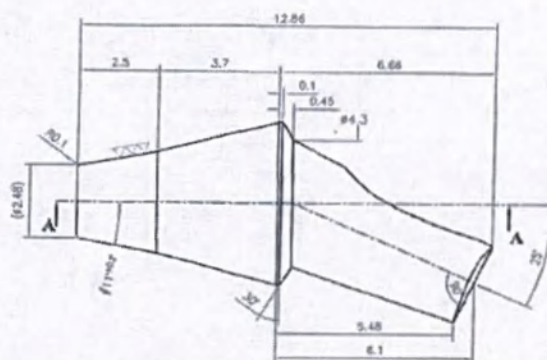
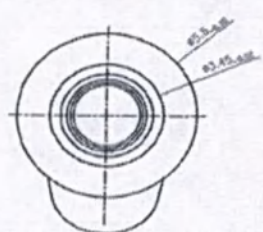
A6armenr Implantwiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (арткул S-BAAN55252)



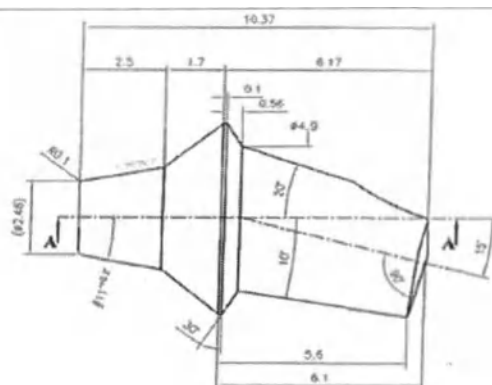
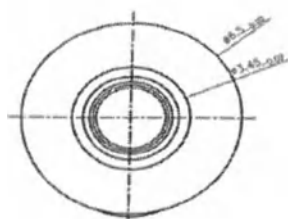
A6armenr Implantwiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (арткул S-BAAN55254)




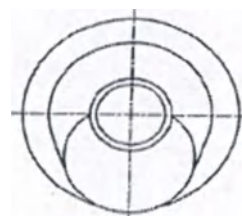
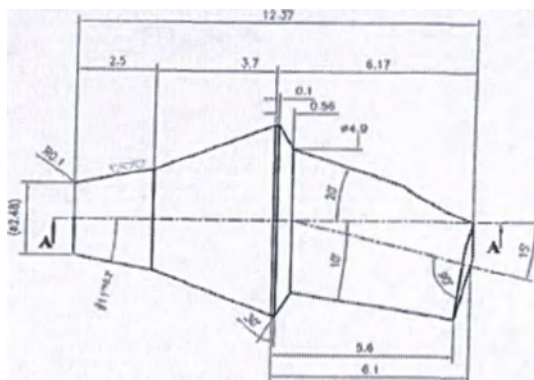
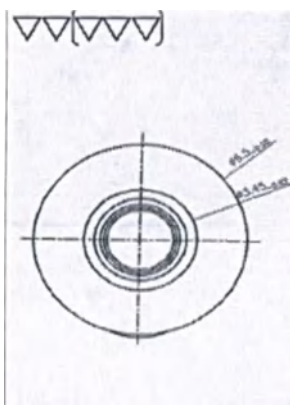
Abutment Implantwiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (арткул S-BAAN65152)



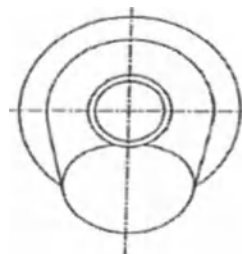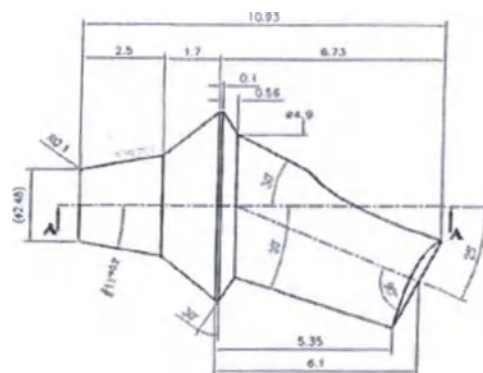
Абфмфмр Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артмфул S-BAAN65154)



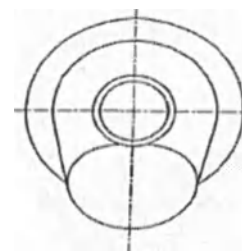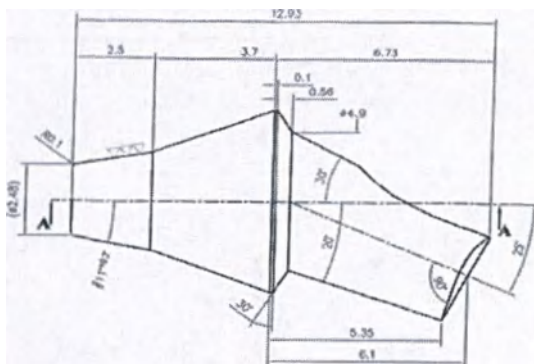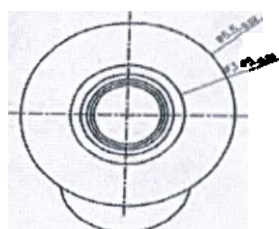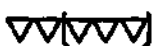
Абфмфмр Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артмфул S-BAAN65252)



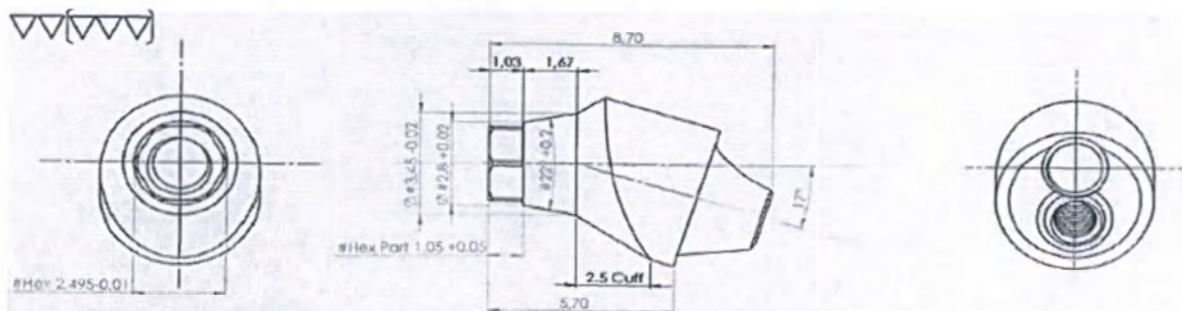
Абфмфмр Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артмфул S-BAAN65254)



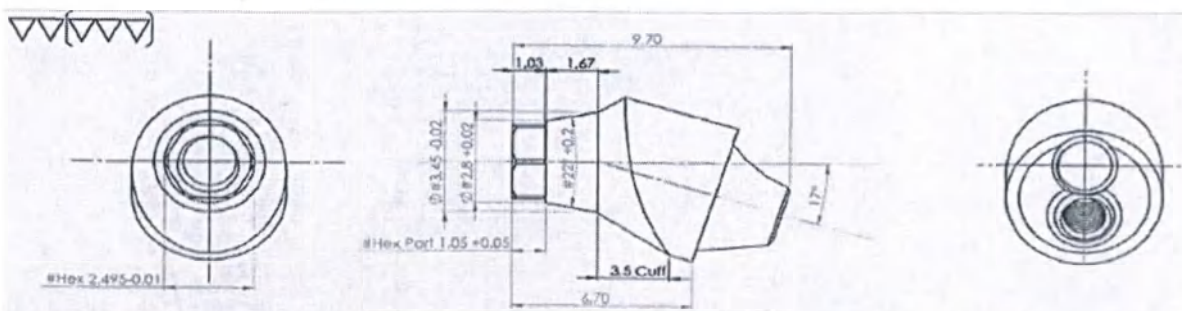
Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 17°, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48172)



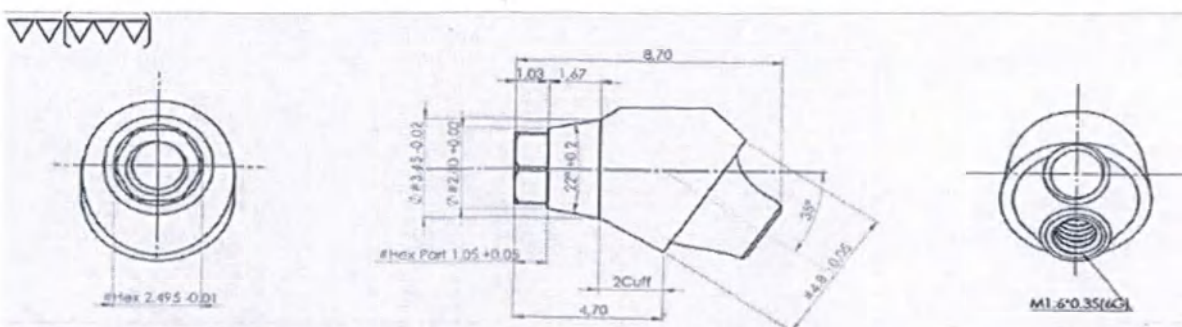Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 17°, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48173)




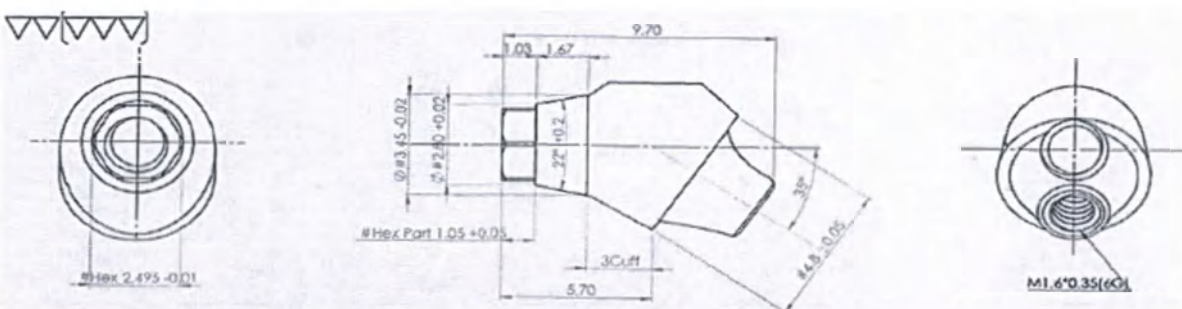Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 35°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48352)




Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 35°, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48353)

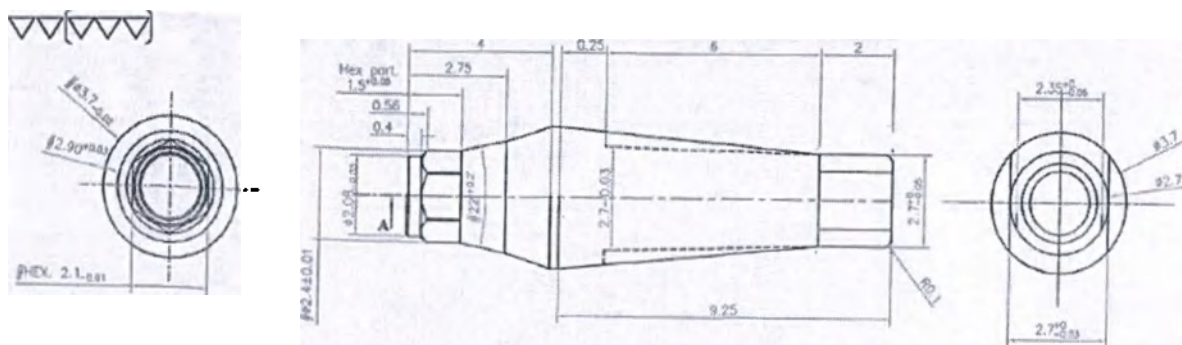
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




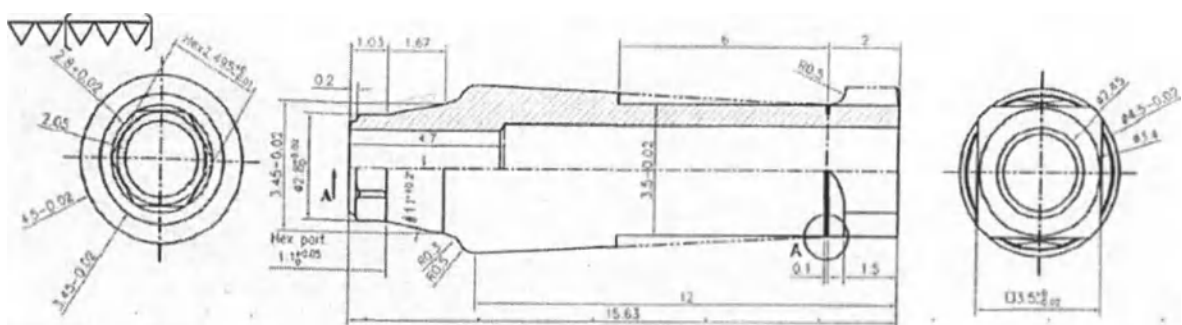
**Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Length - 1.5 mm
NON STERILE (артикул S-BMMA37)**




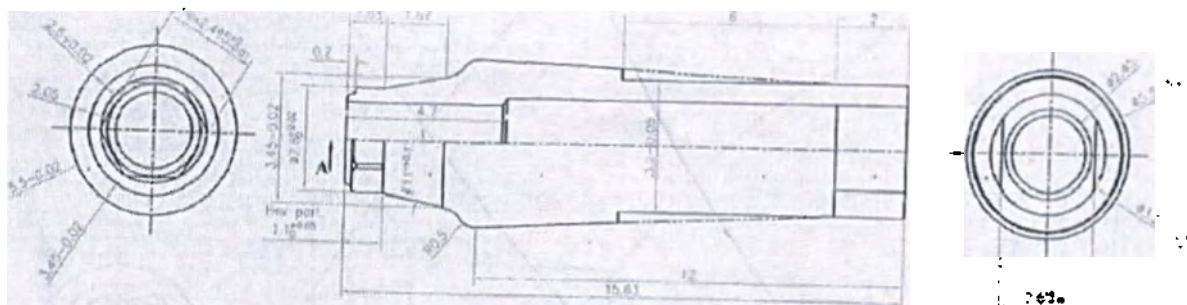
**Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm
NON STERILE (артикул S-BMA45)**



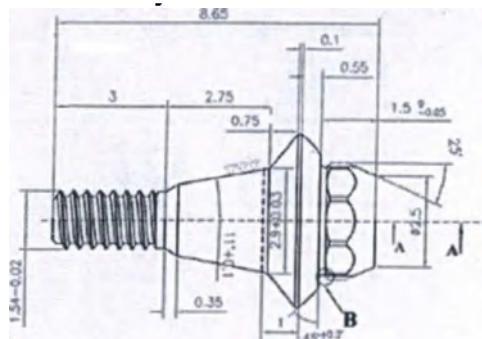
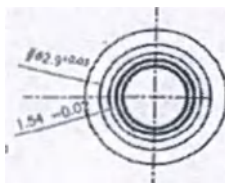
**Абатмент implantswiss Bone Level Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm
NON STERILE (артикул S-BMA55)**



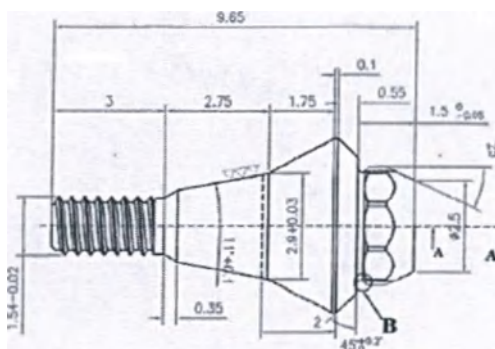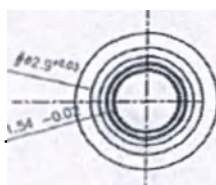Абратмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикула S-BMOA10)





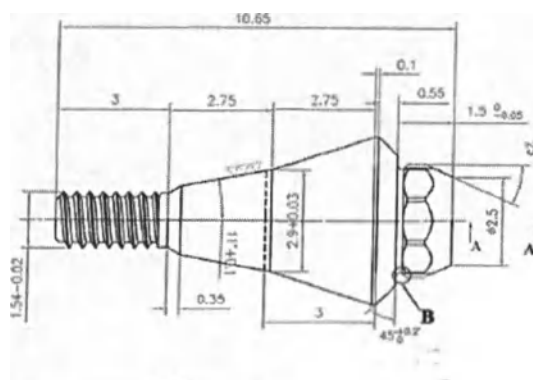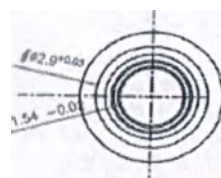Абратмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикула S-BMOA20)





Абратмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикула S-BMOA30)

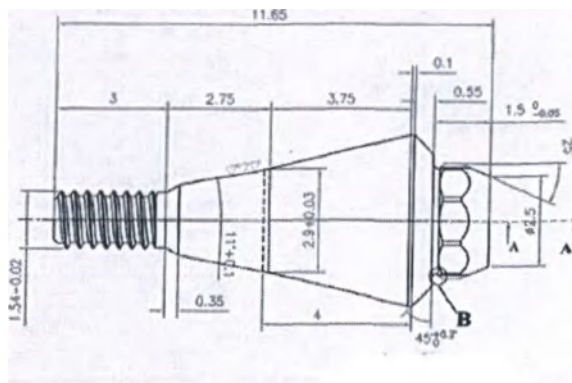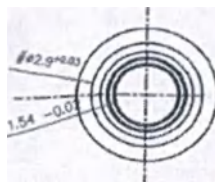
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss. MONO IMPLANT. i-system. в вариантах исполнения»



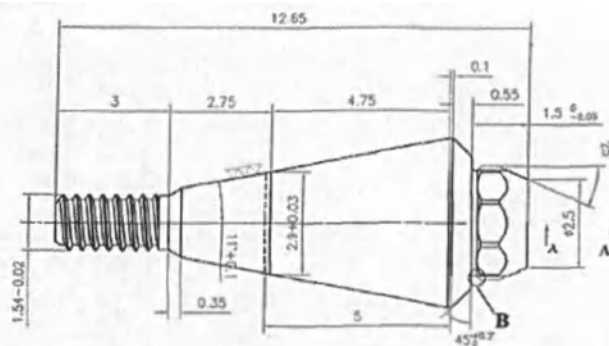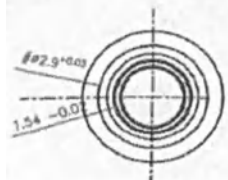Абратмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA40)






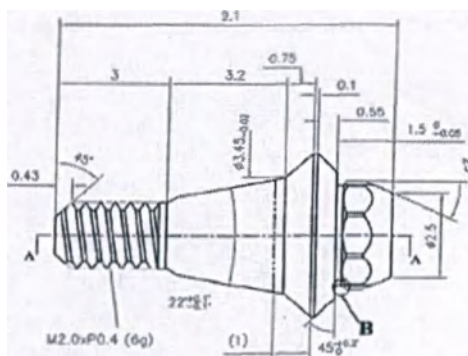Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA50)





Абратмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BOA10)

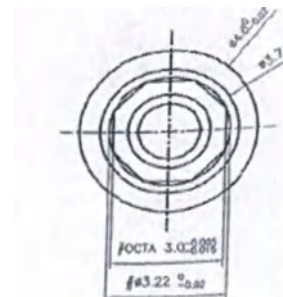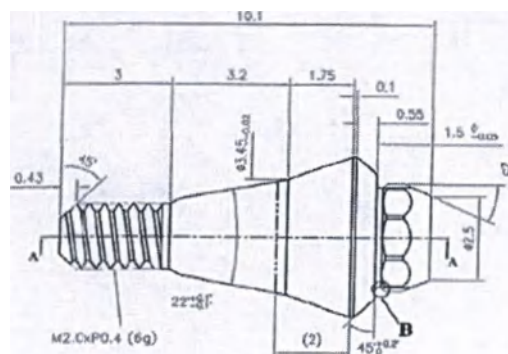
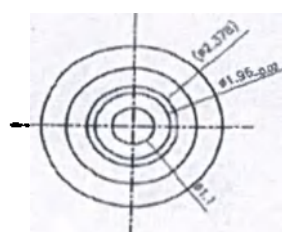
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



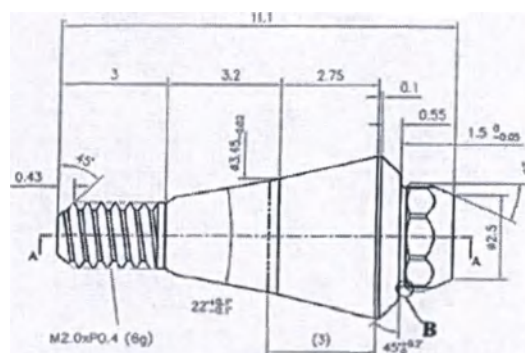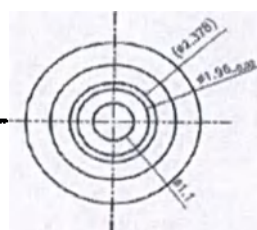**Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 2.0 mm
NON STERILE (артикул S-BOA20)**




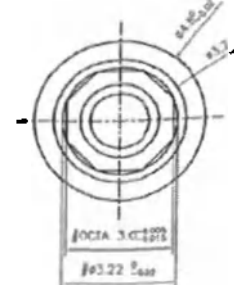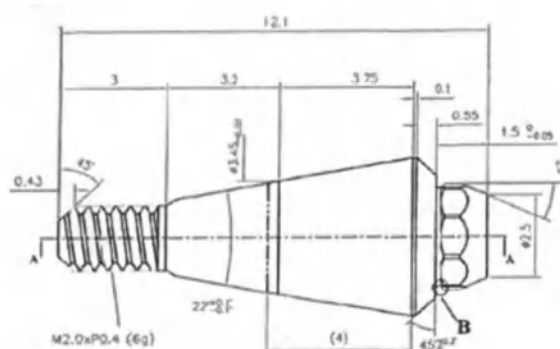**Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 3.0 mm
NON STERILE (артикул S-BOA30)**




**Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 4.0 mm
NON STERILE (артикул S-BOA40)**

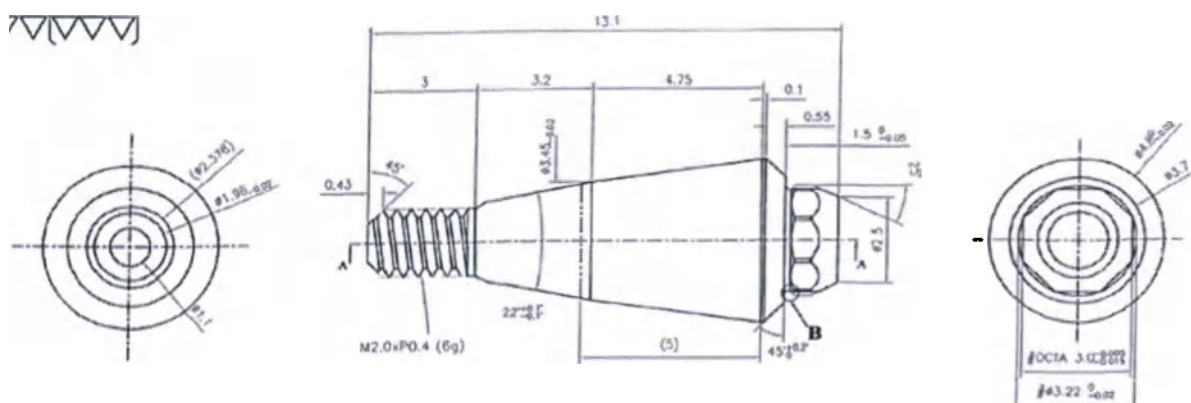
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



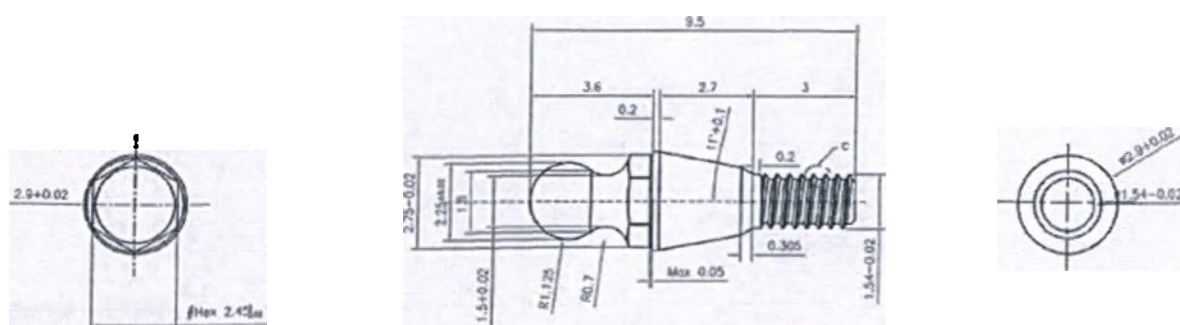
**Абютмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 5.0 mm
NON STERILE (артрикул S-BOA50)**



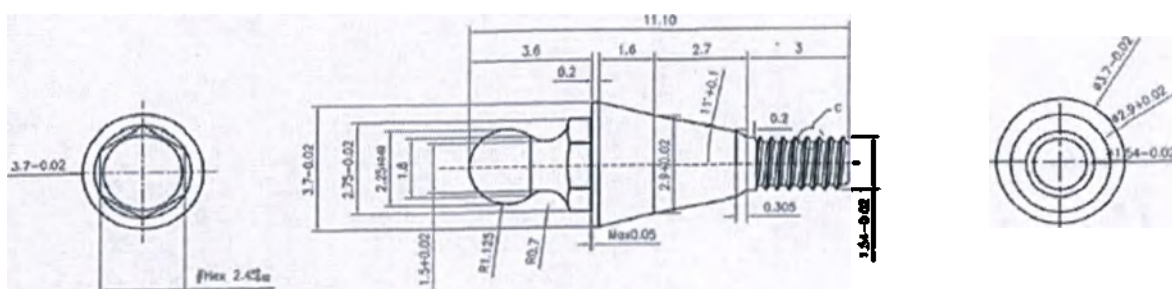
**Абютмент Implantswiss Bone Level Mini O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 2.9 mm, Gingival Height -
0.5 mm NON STERILE (артрикул S-BMORA05)**



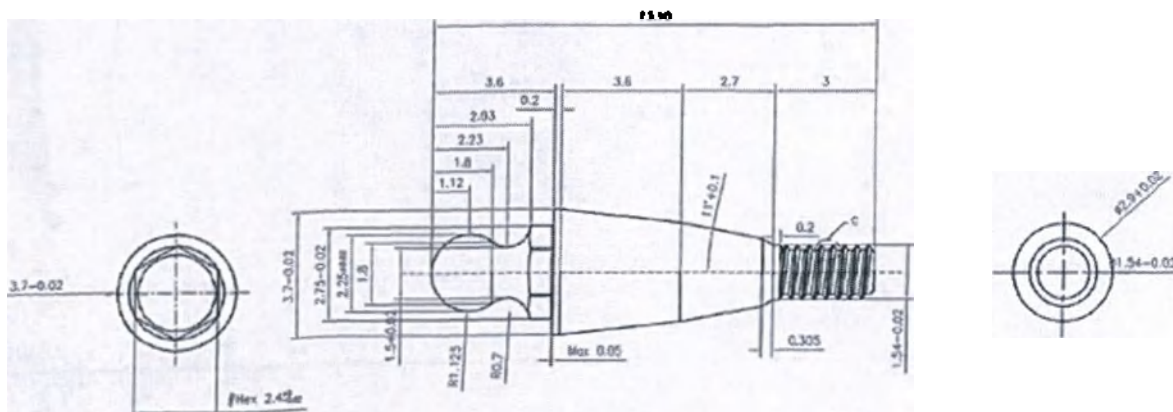
**Абютмент Implantswiss Bone Level Mini O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height -
2.0 mm NON STERILE (артрикул S-BMORA20)**



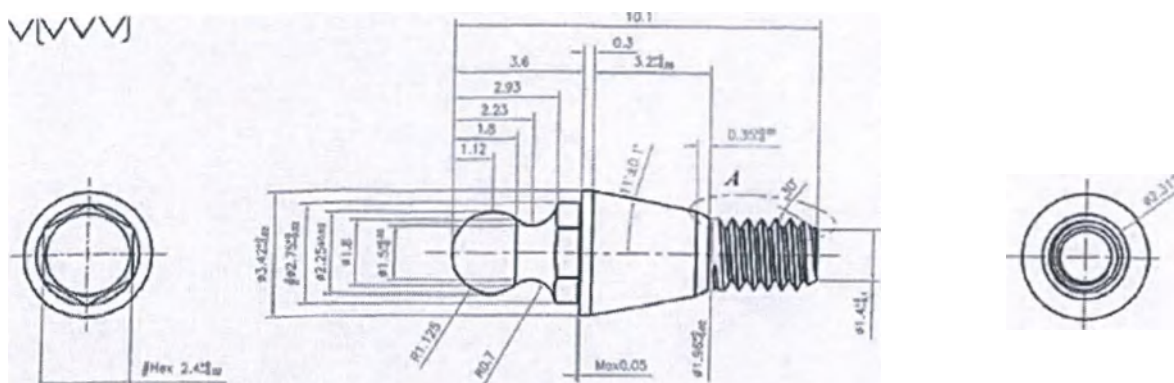Abutment Implantswiss Bone Level Mini O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMORA40)




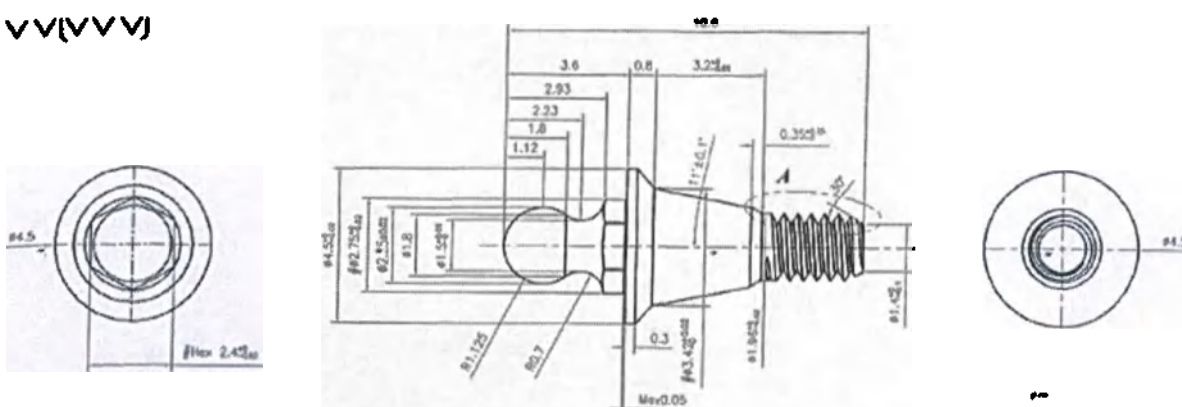Abutment Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.42 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-BORA05)




Abutment Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.42 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA10)

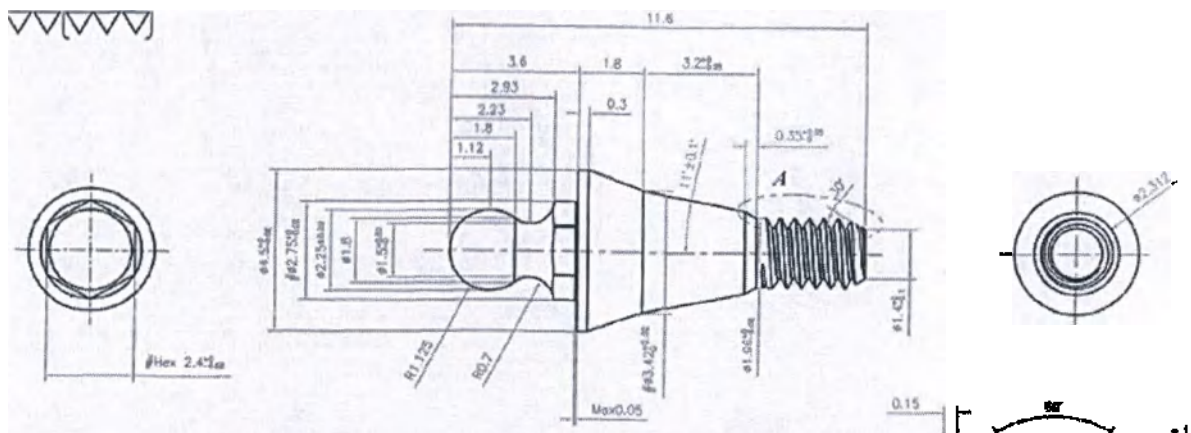
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss. MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



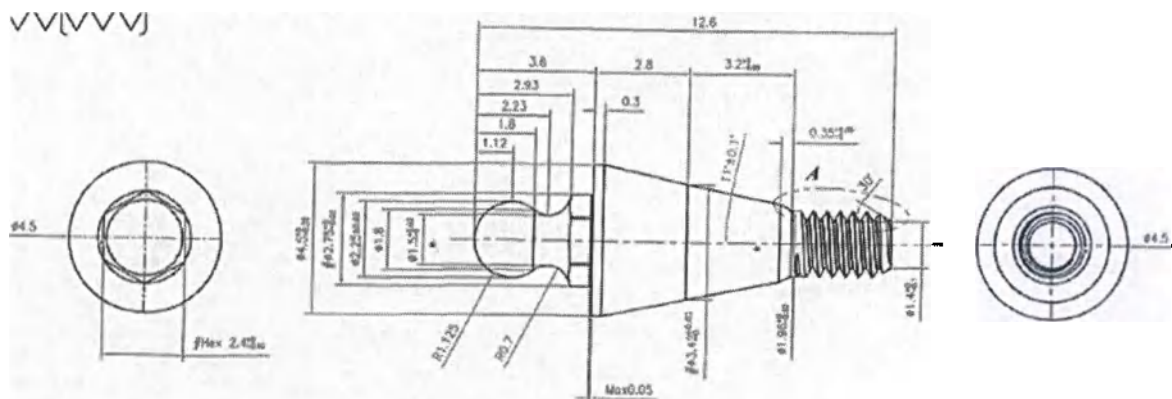
Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA20)



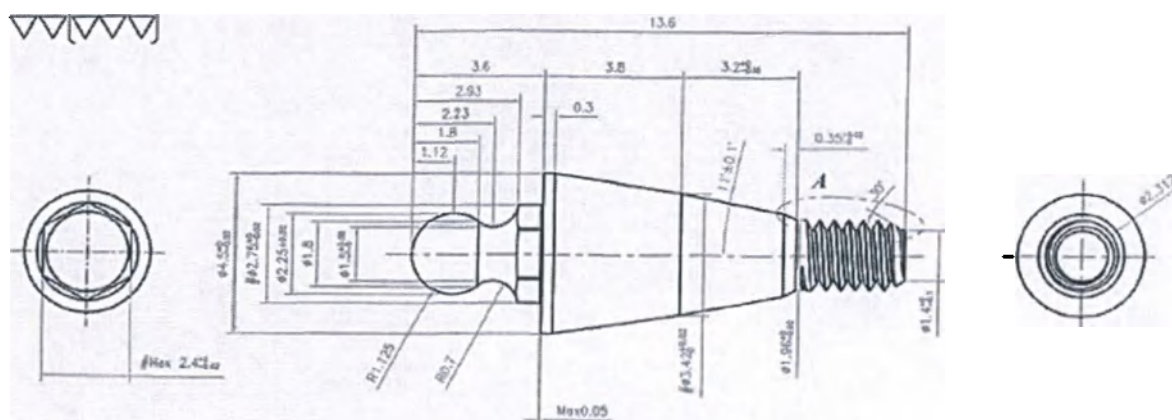
Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA30)



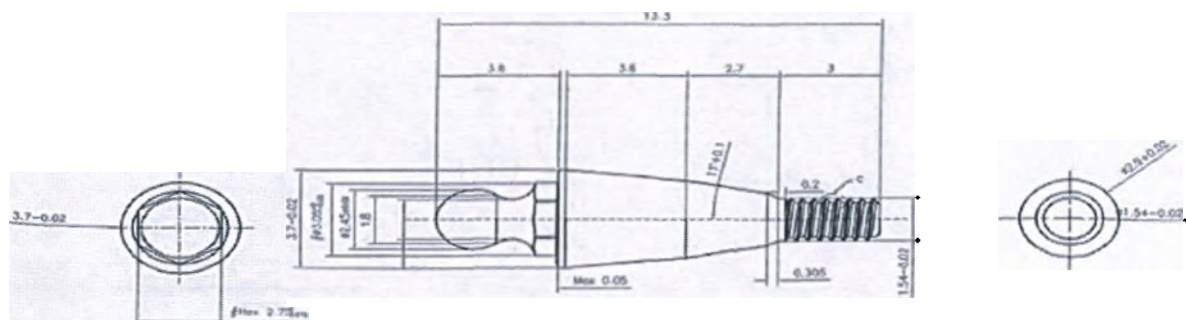
Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA40)



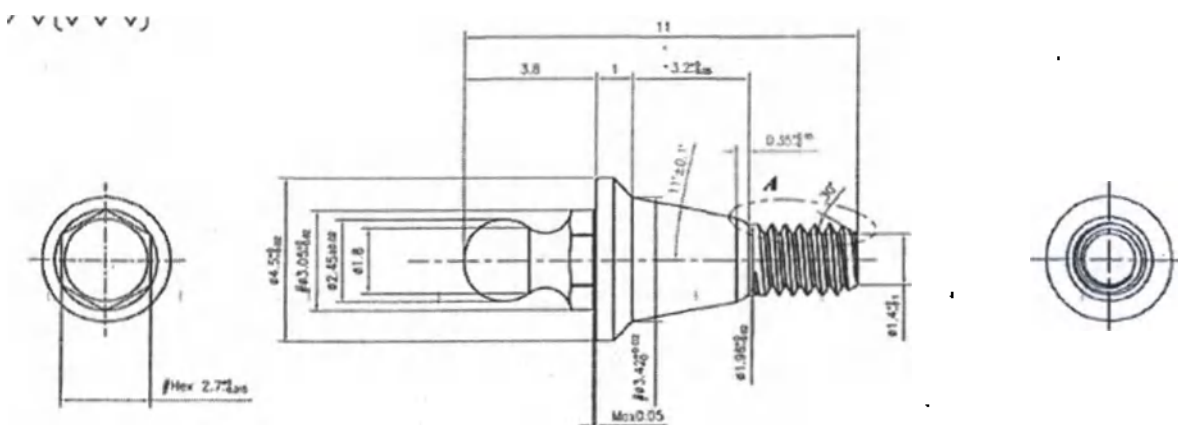
A6armeur Implantswiss Bone Level Superb Overdenture Mini Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (арматура S-BMEBA40)






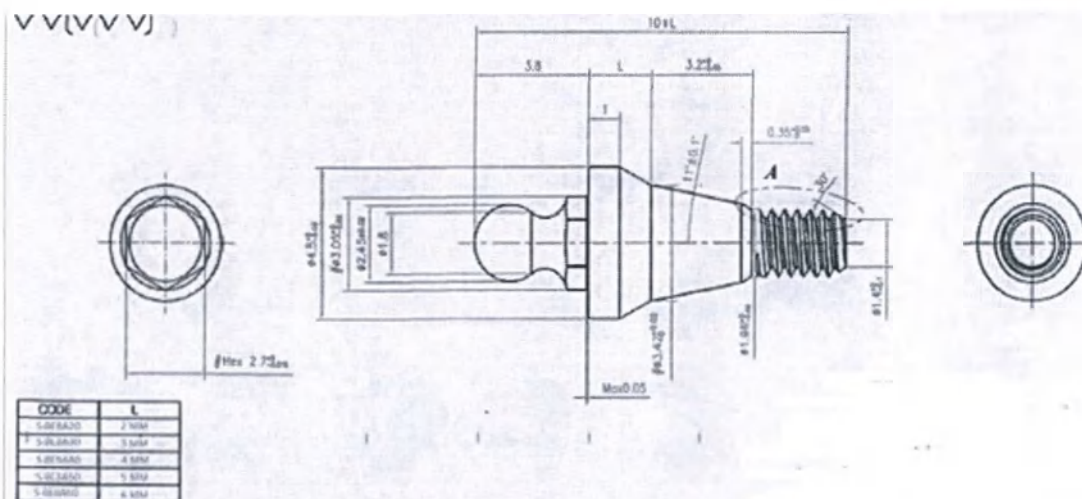
A6armeur Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.42 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (арматура S-BEBA10)






Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA20),
 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA30),
 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA40),
 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA50),
 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 6.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA60):

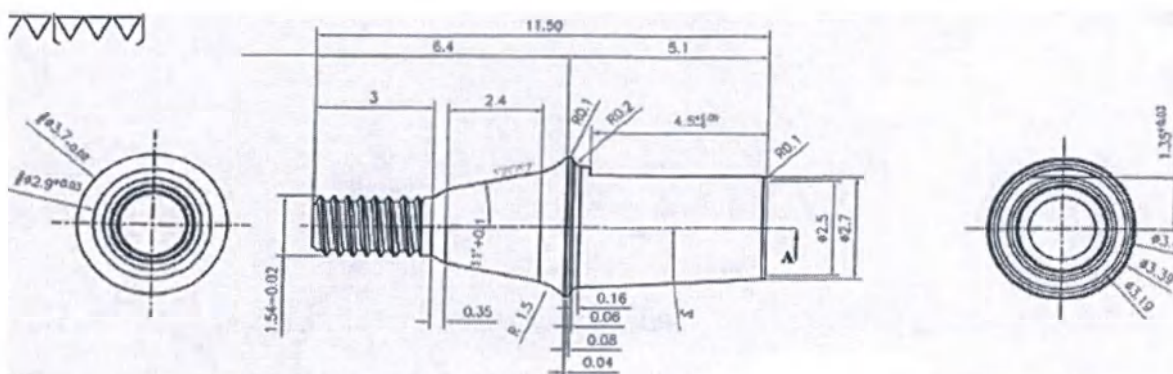

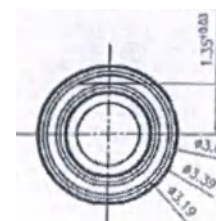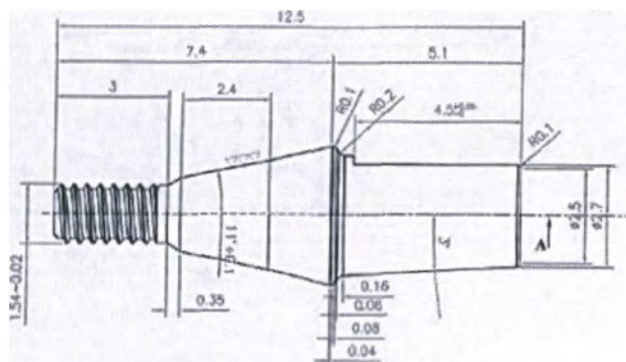
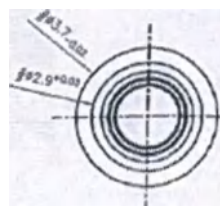
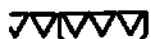
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3710)



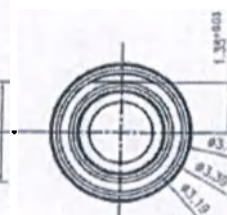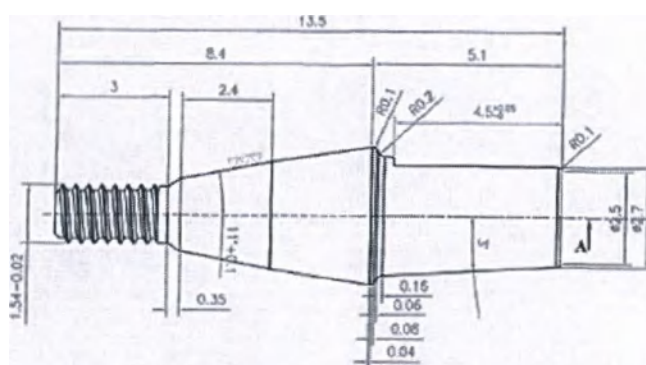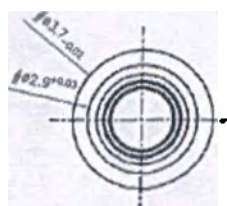
Абразив Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3720)



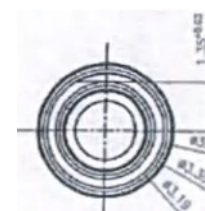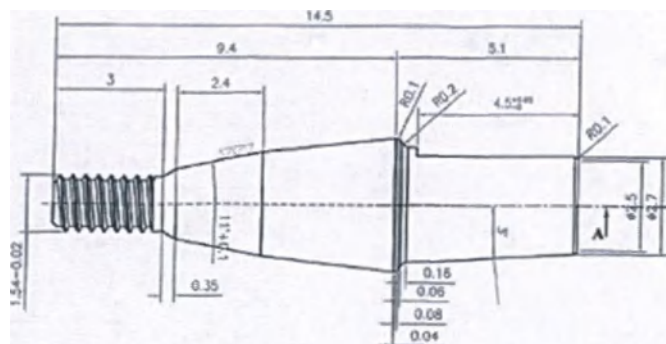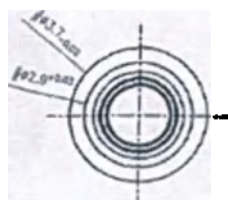
Абразив Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3730)



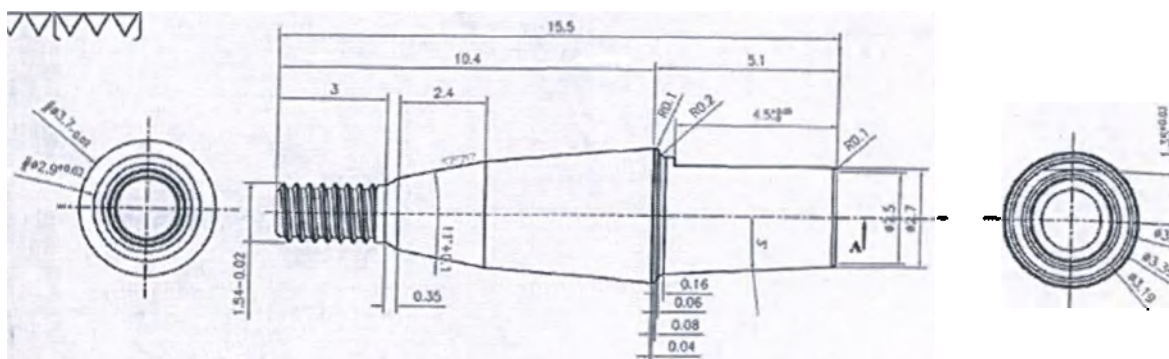Абразив Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3740)




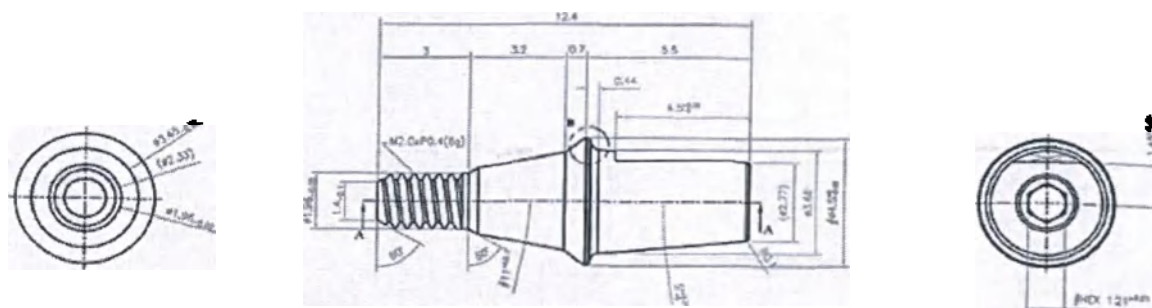Абютмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3750)




Абютмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4510)

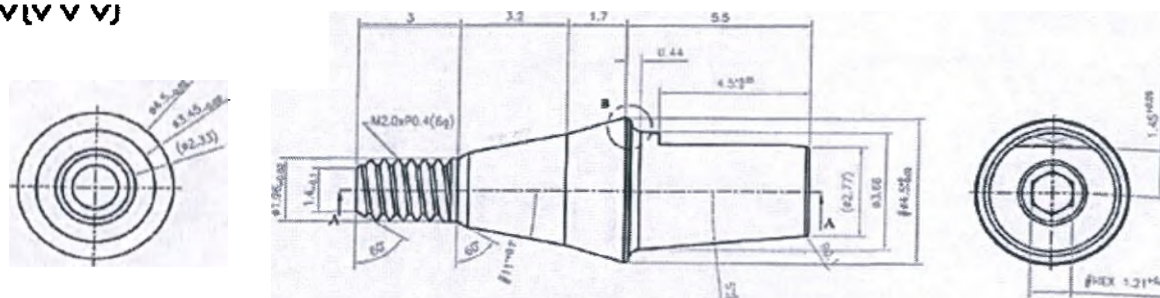V{V V V}




Абютмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4520)

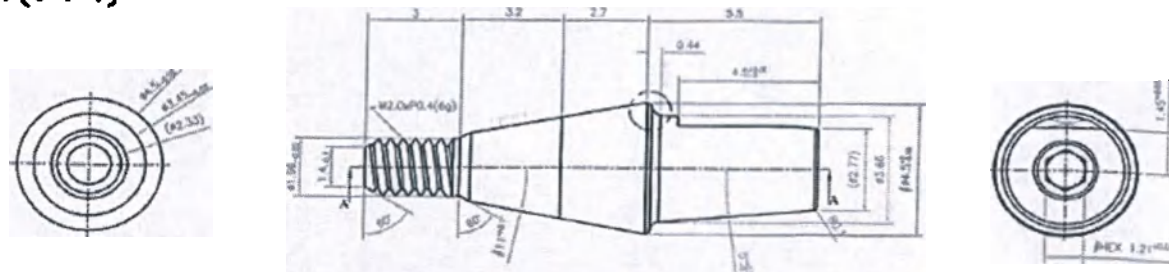.







Абютмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4530)



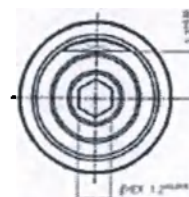
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT. i-system, в вариантах исполнения»



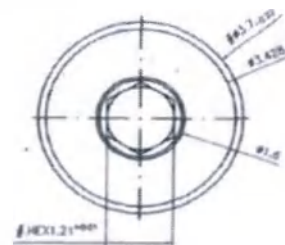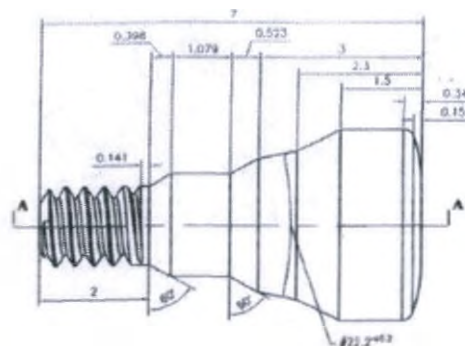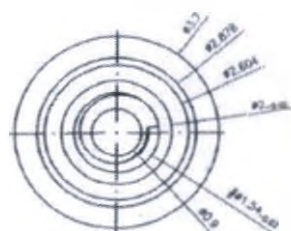
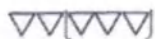
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



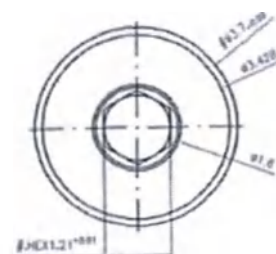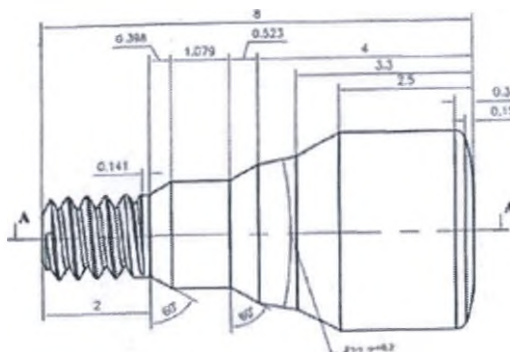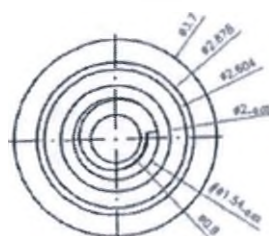
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3725)



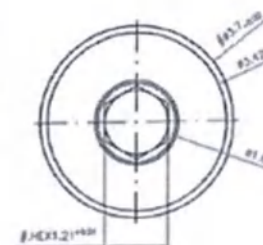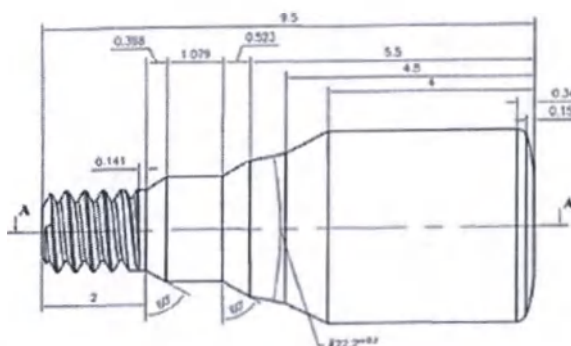
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3735)



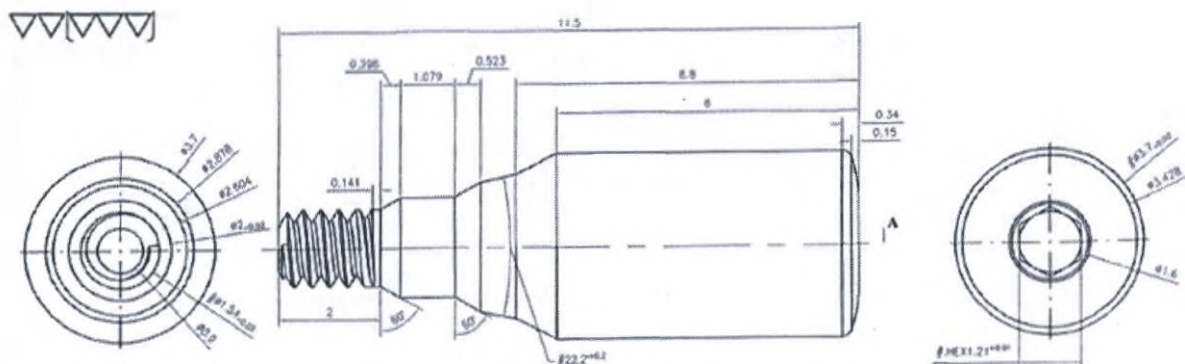
Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3750)



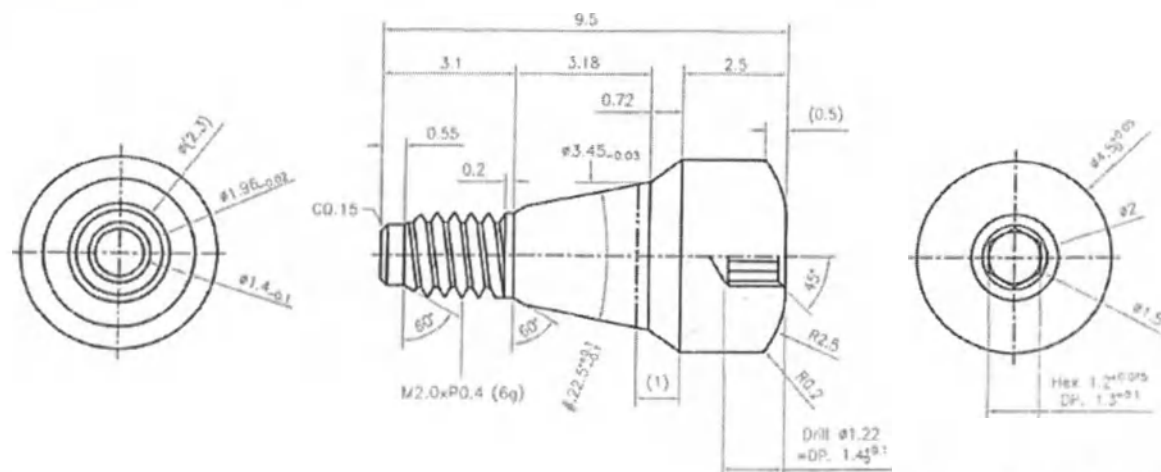Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3770)




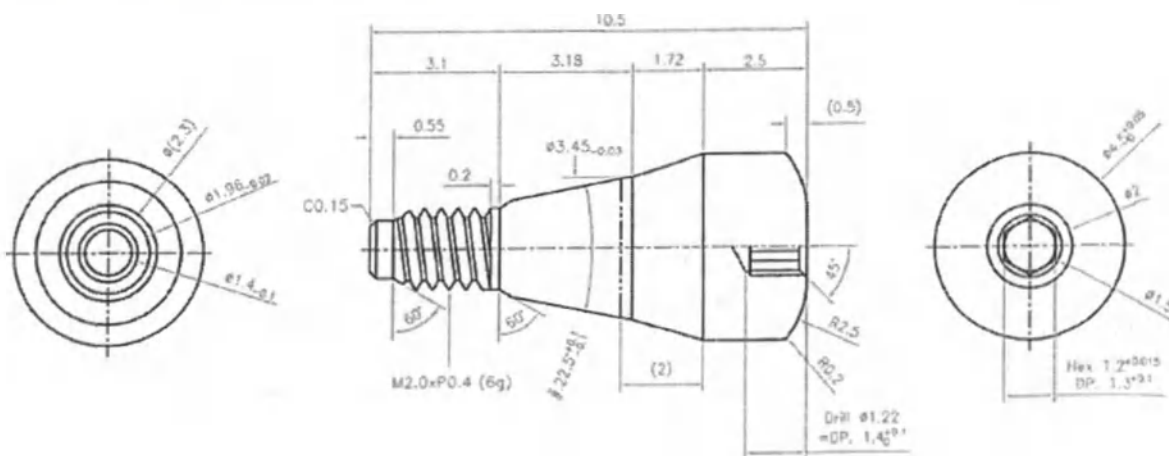Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4510)




Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4520)

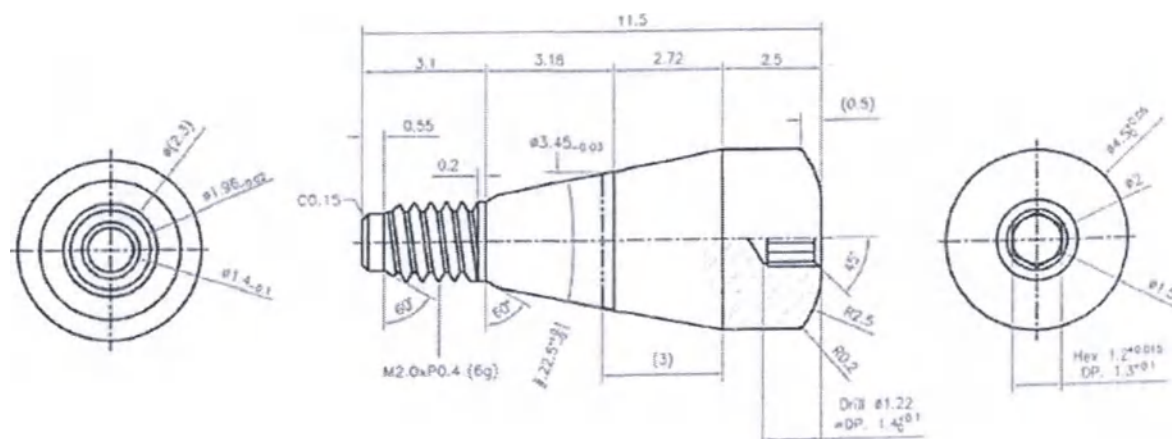
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



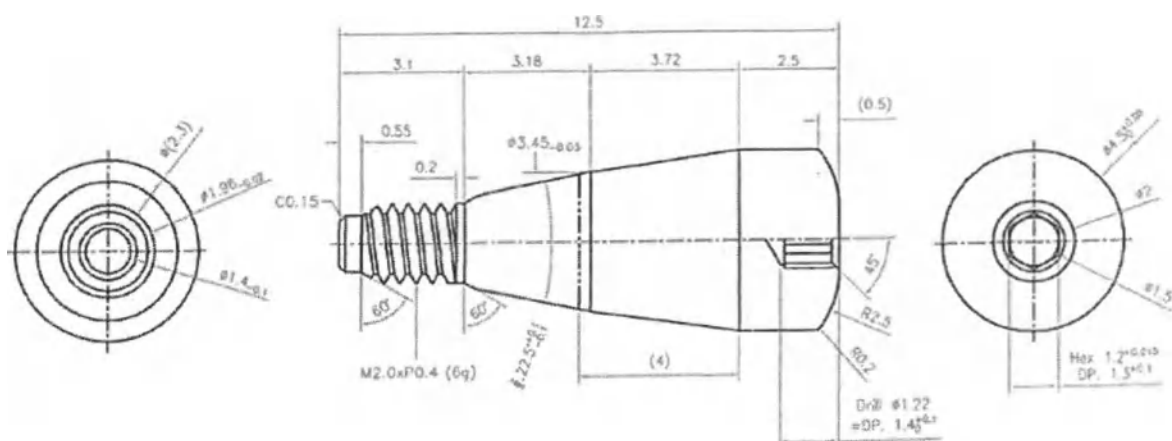Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4530)




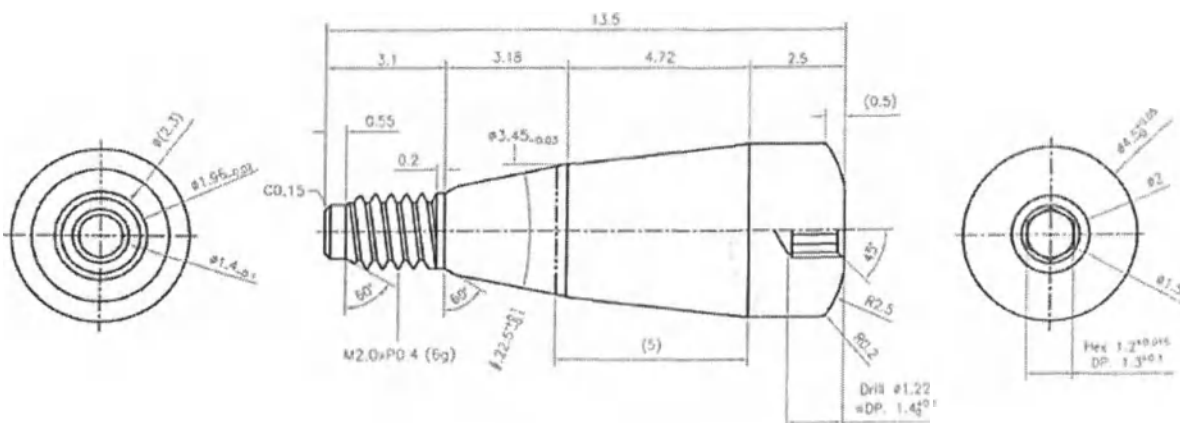Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4540)




Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4550)

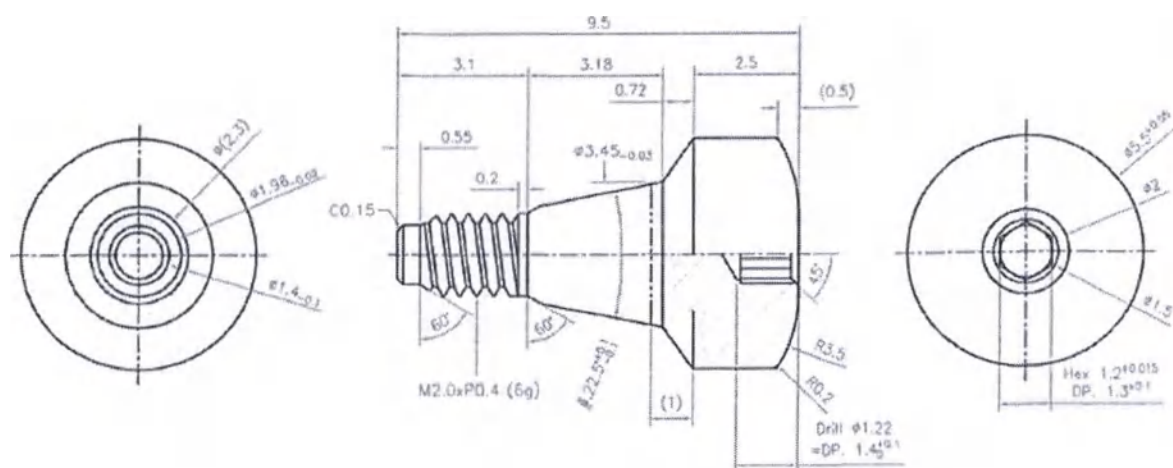
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



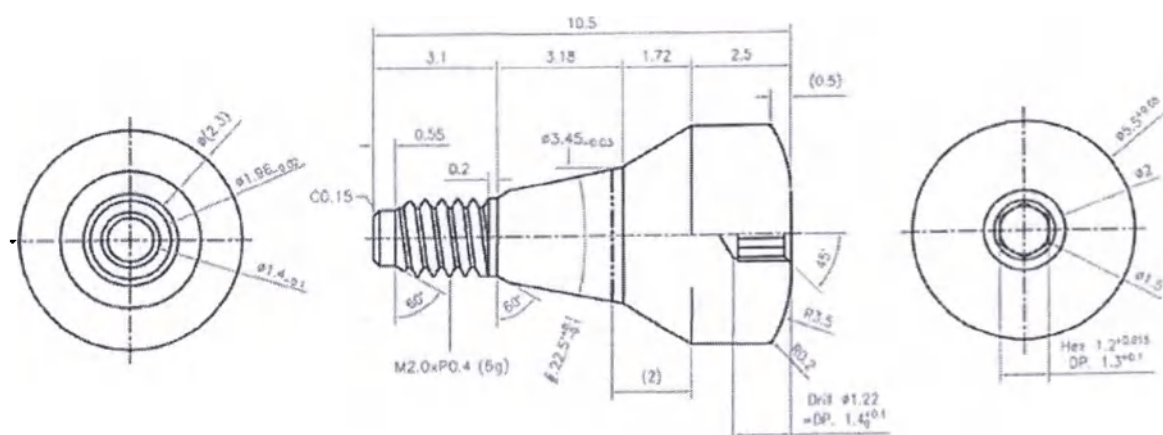Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5510)



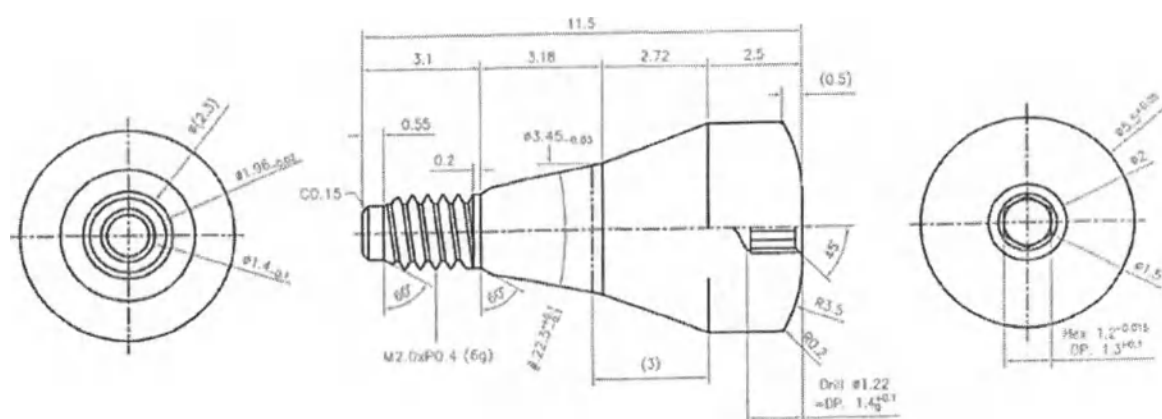
Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5520)




Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5530)

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

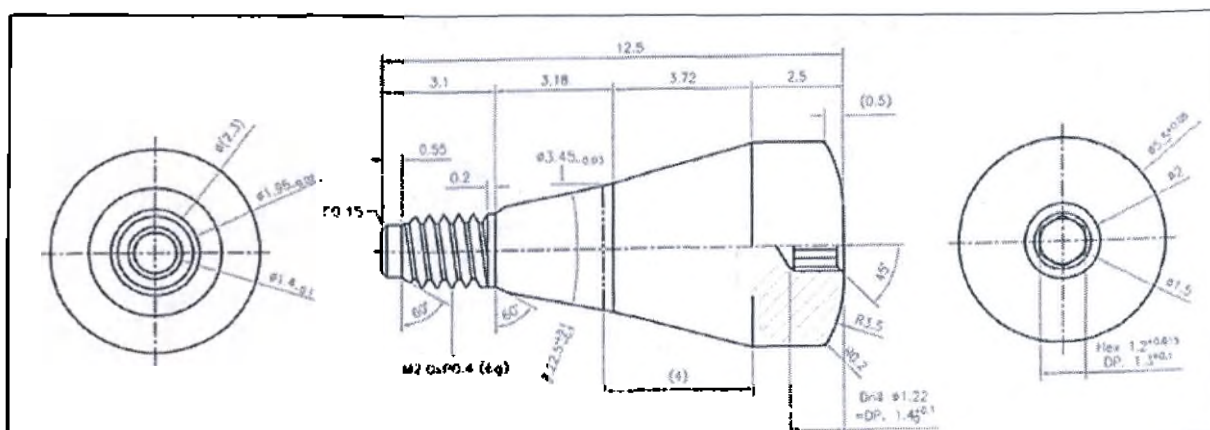
Страница 57 из 344



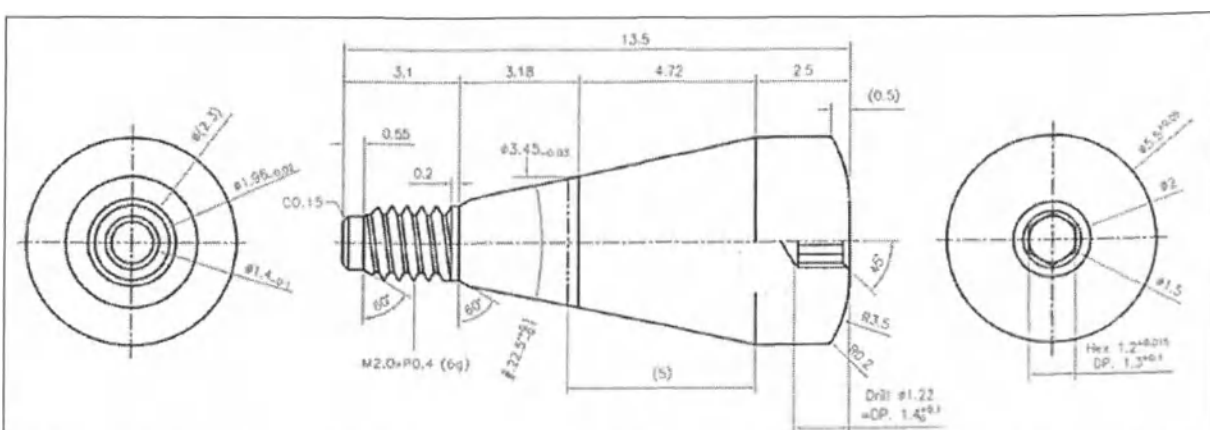
Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5540)



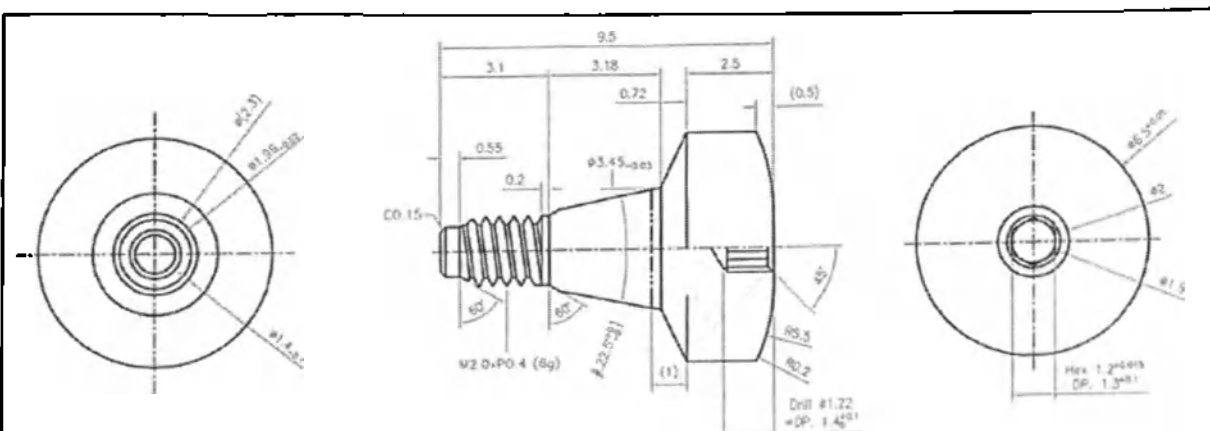
Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5550)



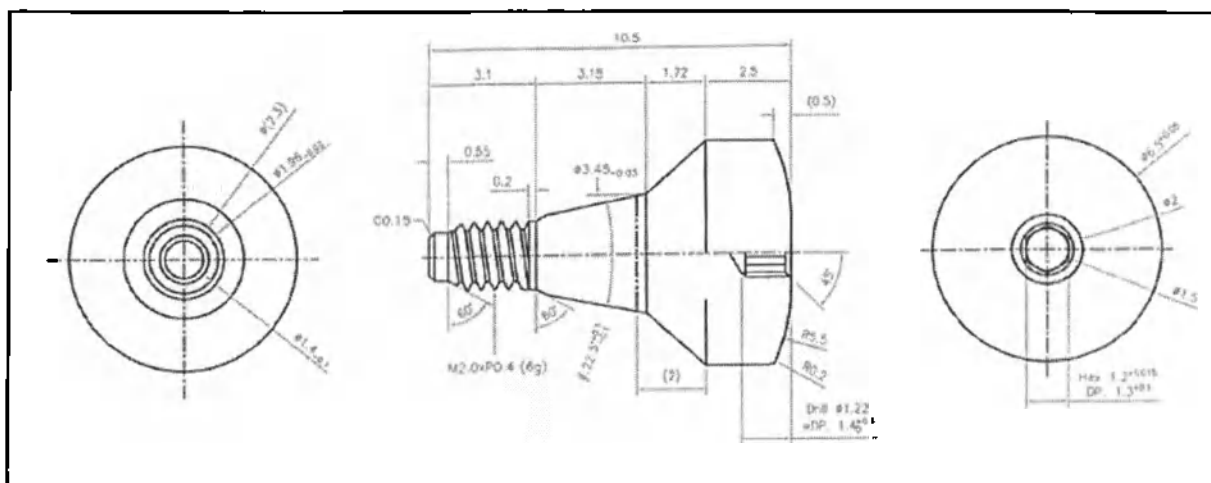
Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6510)



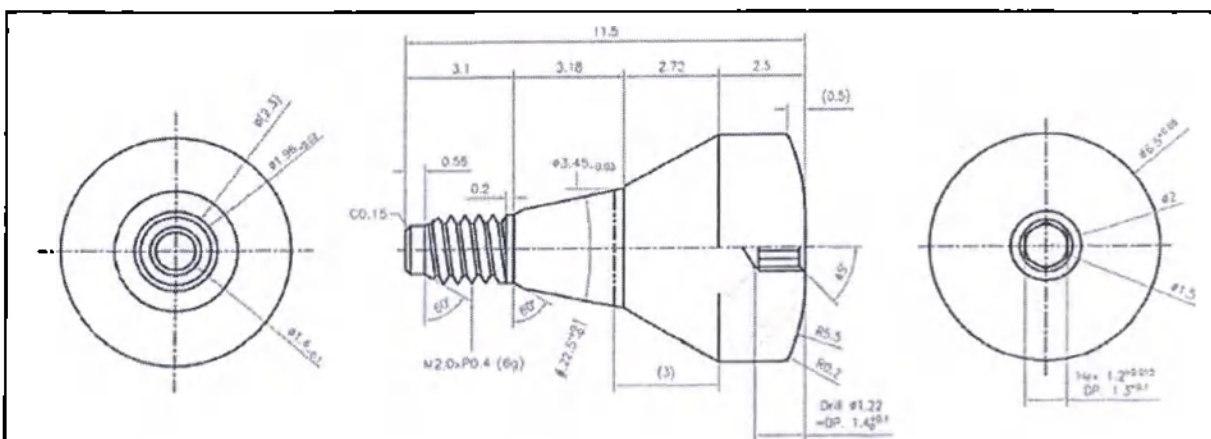Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6520)




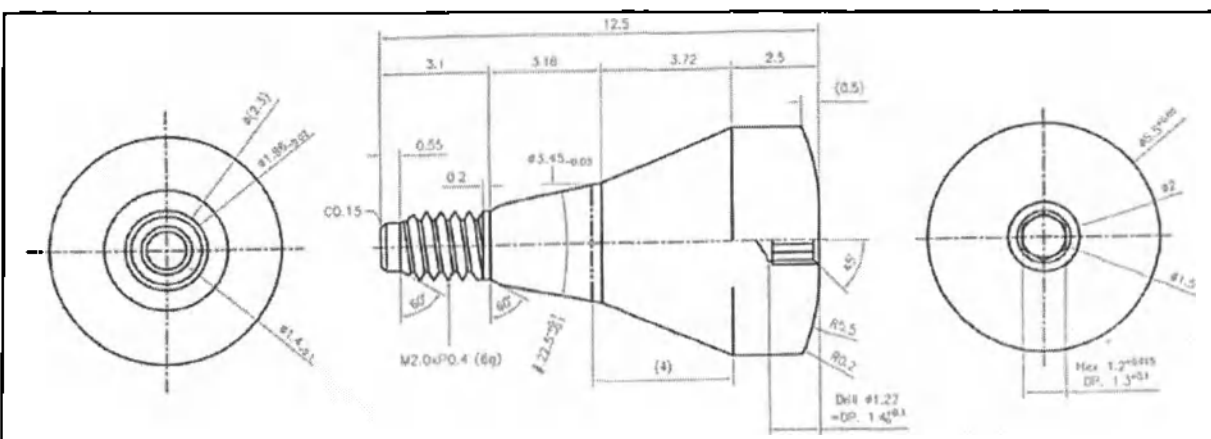Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6530)



Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6540)

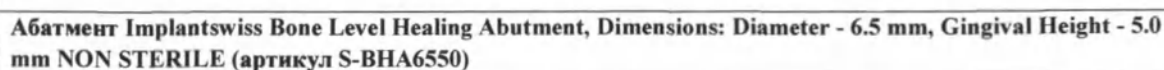Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



SECTION VIEW "A-A"

DETAIL "R"
SCALE 3:1


TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PART NAME:	CODE:	MATERIAL:
1. Under Size: A: 0.05	Bone-Level Temporary Abutment	S-8TA45	PEEK
2. Upper Size: A: 0.1		PUBLICATION DATE: 02.04.2014	
3. Angles: A: 20°		SPEC: Ø4.5, L: 53.48mm	
4. Character MARK: C: 0.1			
5. Round: MARK: B: 0.1			

REV NO: RELEASED
REVISION: REVISION NOTE
DATE: 29.04.2010


DWG: OTH APP SCALE: NCM UNIT: mm REV: A

Страница 60 из 344

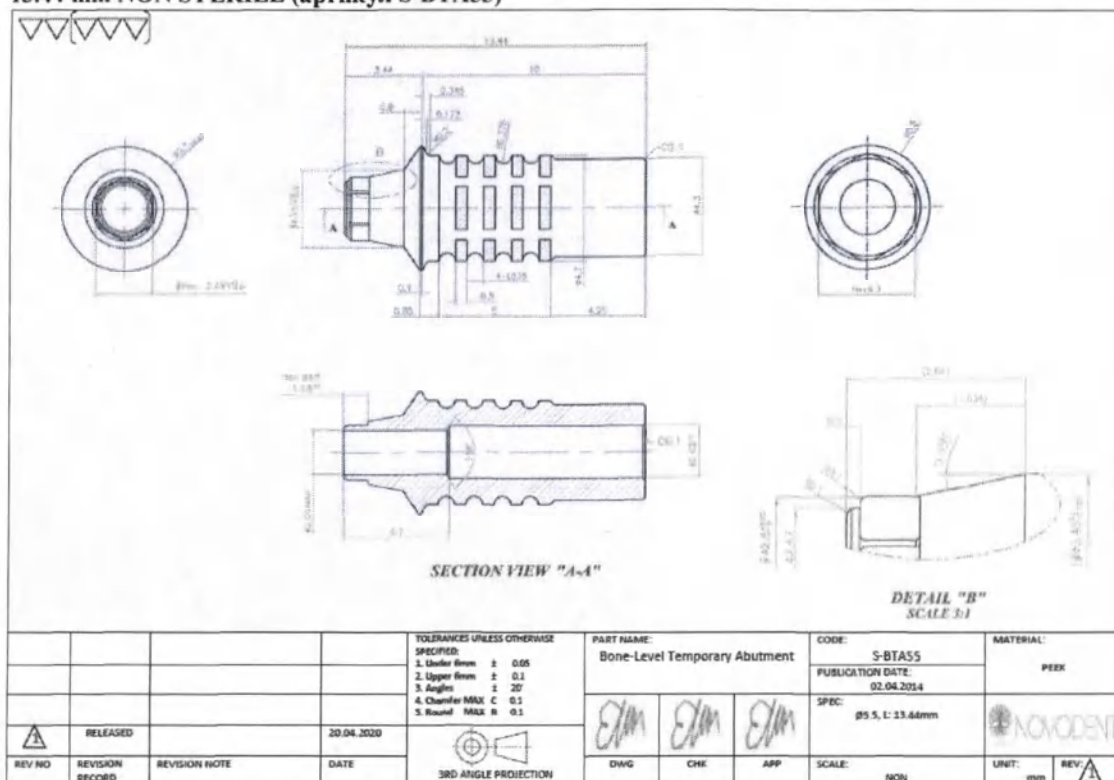Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTA55)




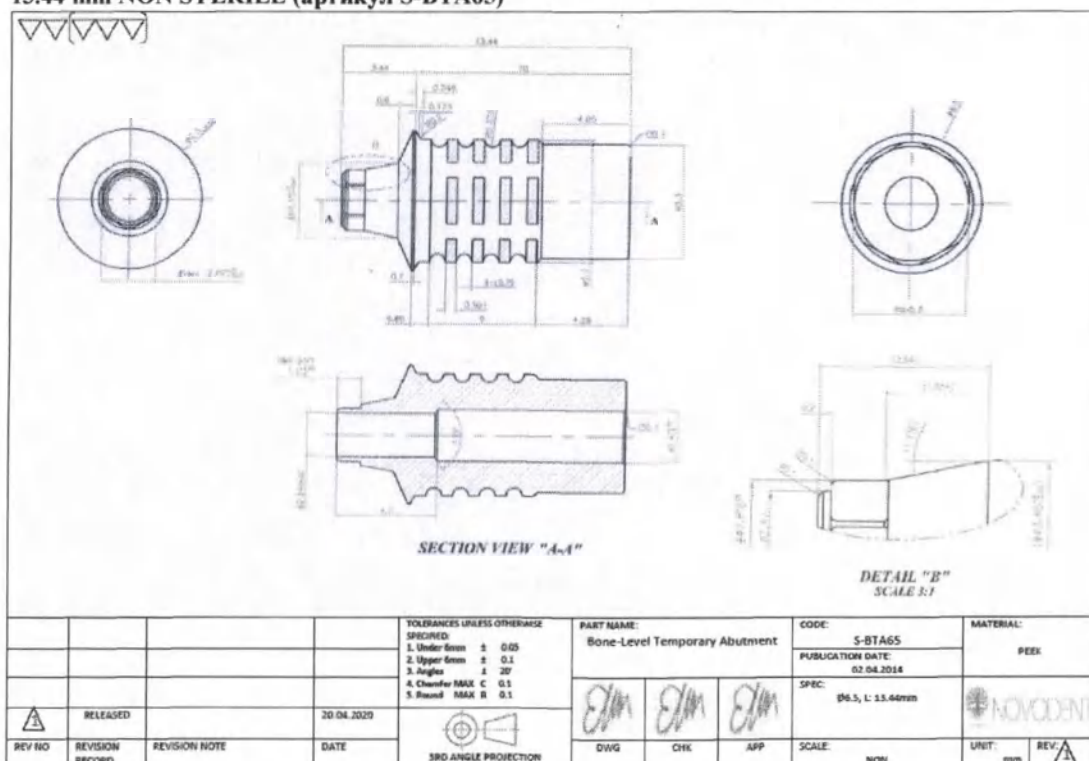Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTA65)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

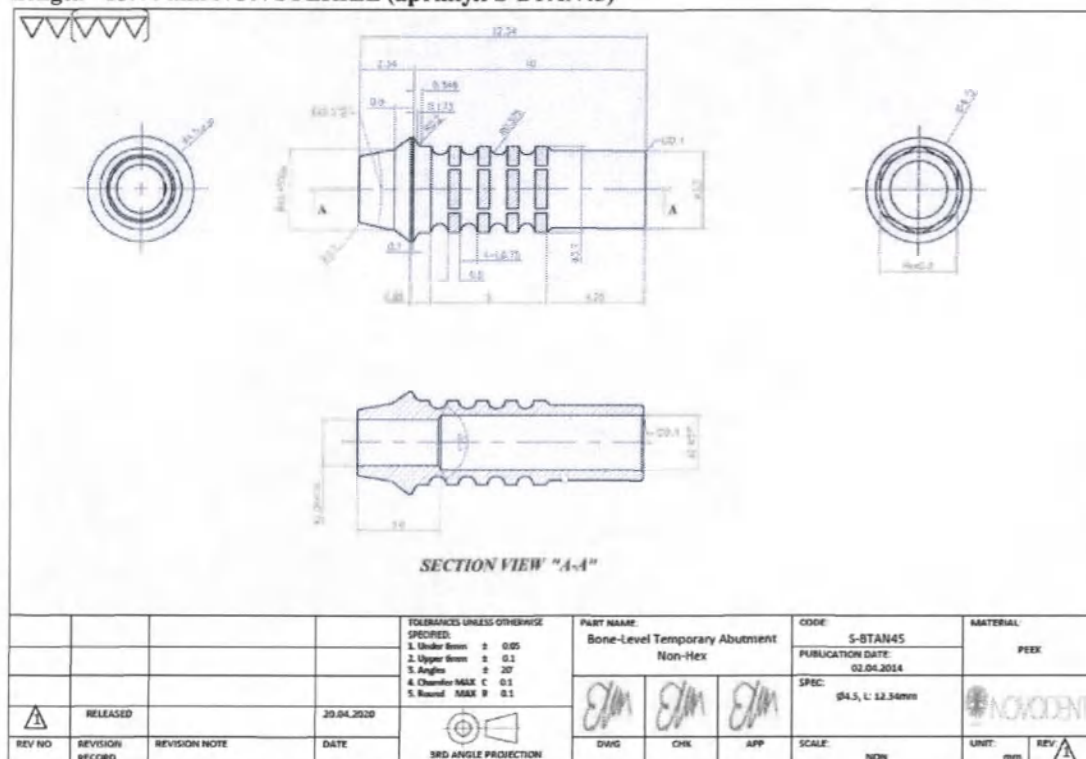Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTAN45)




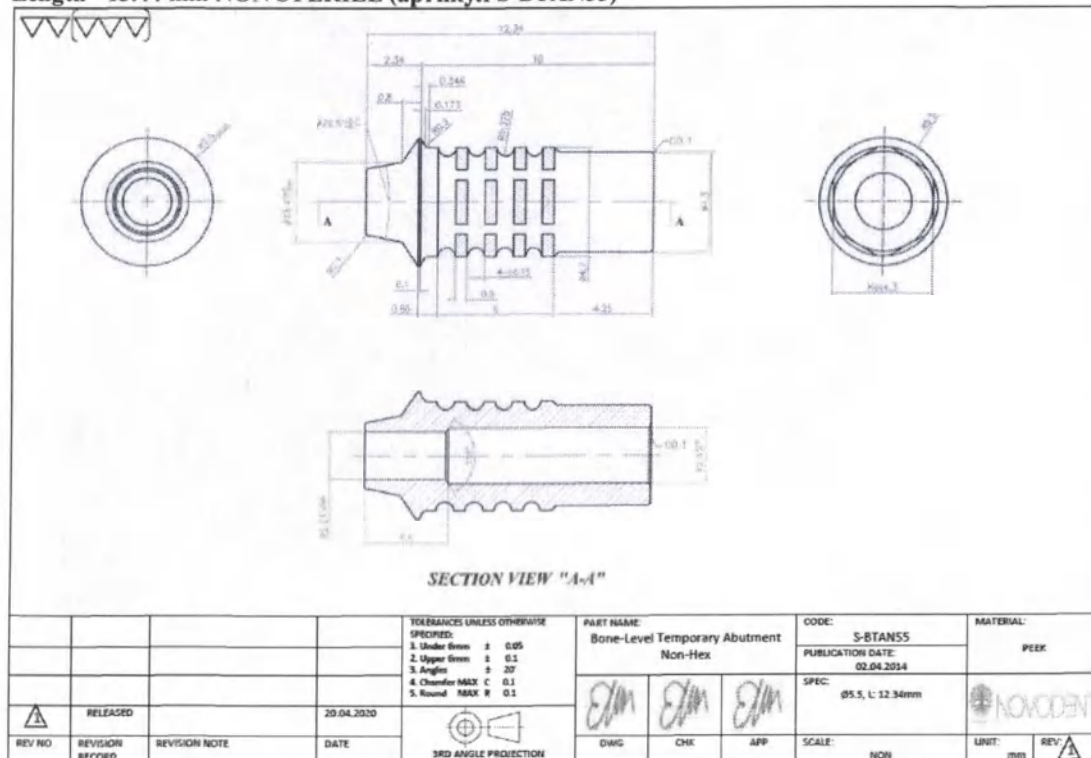Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTAN55)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

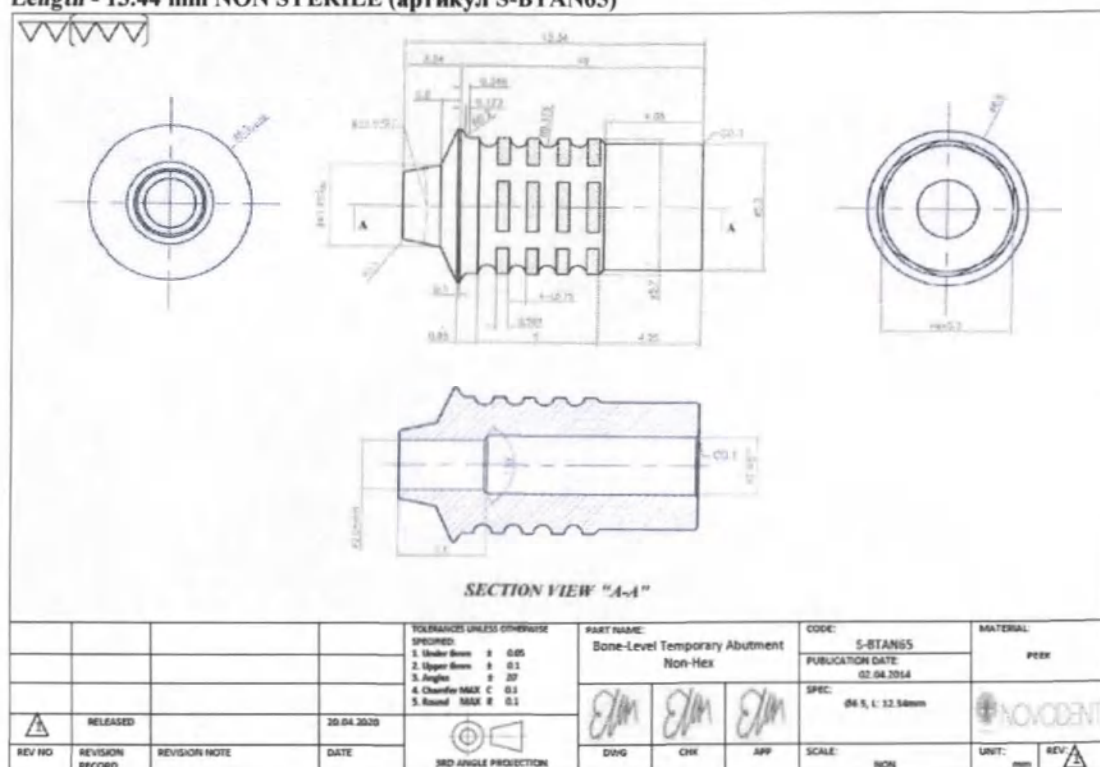Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTAN65)




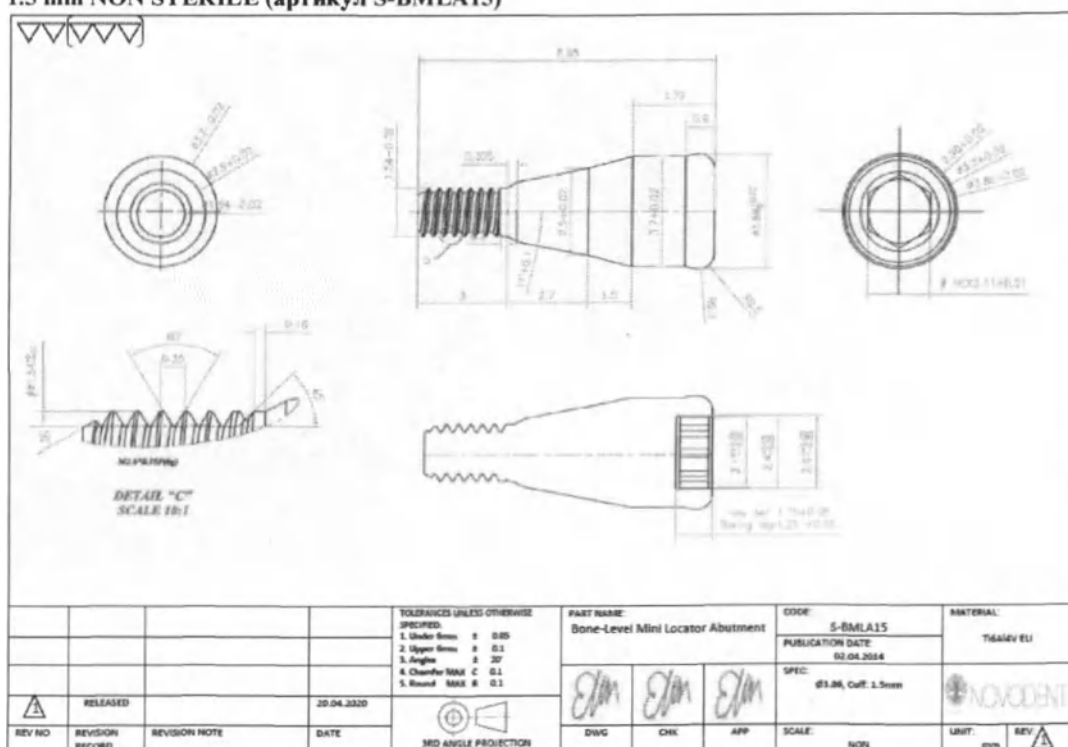Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86.0 mm, Gingival Height - 1.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA15)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

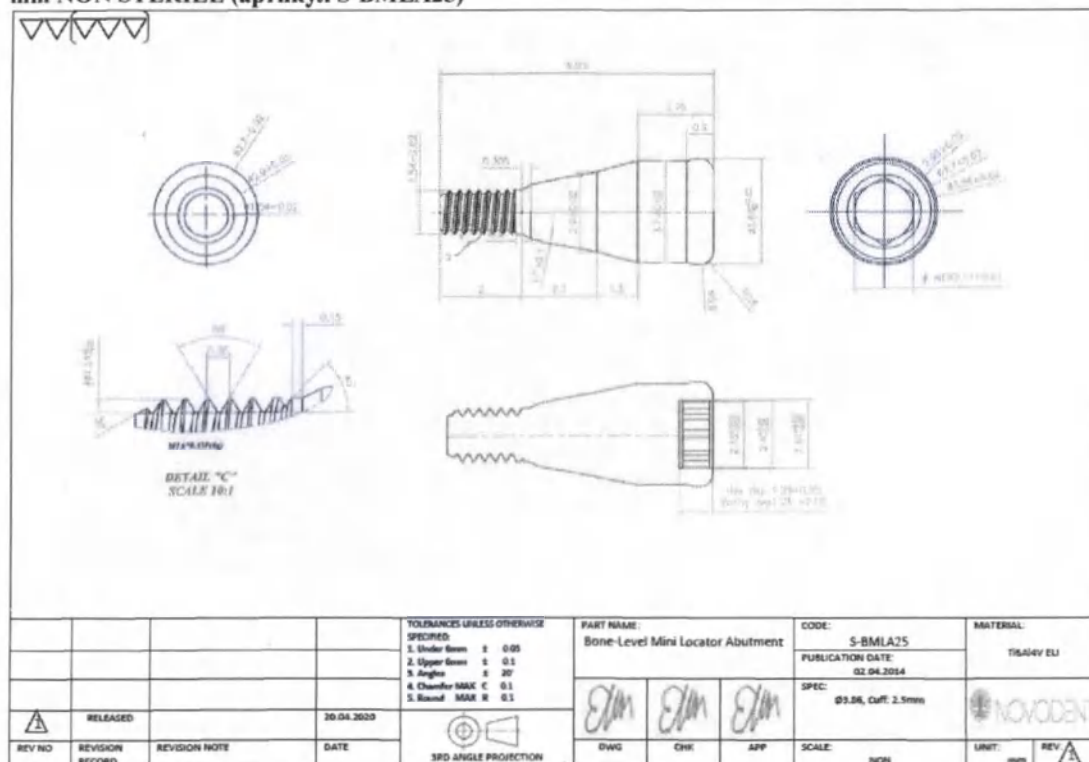Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA25)




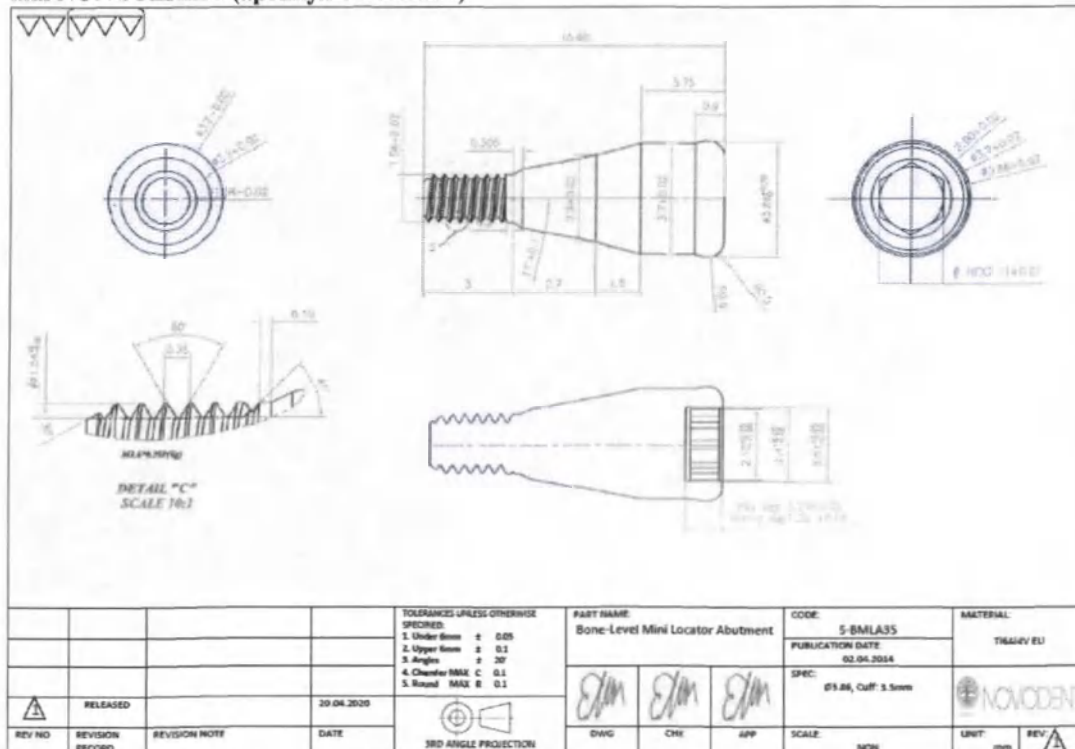Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA35)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

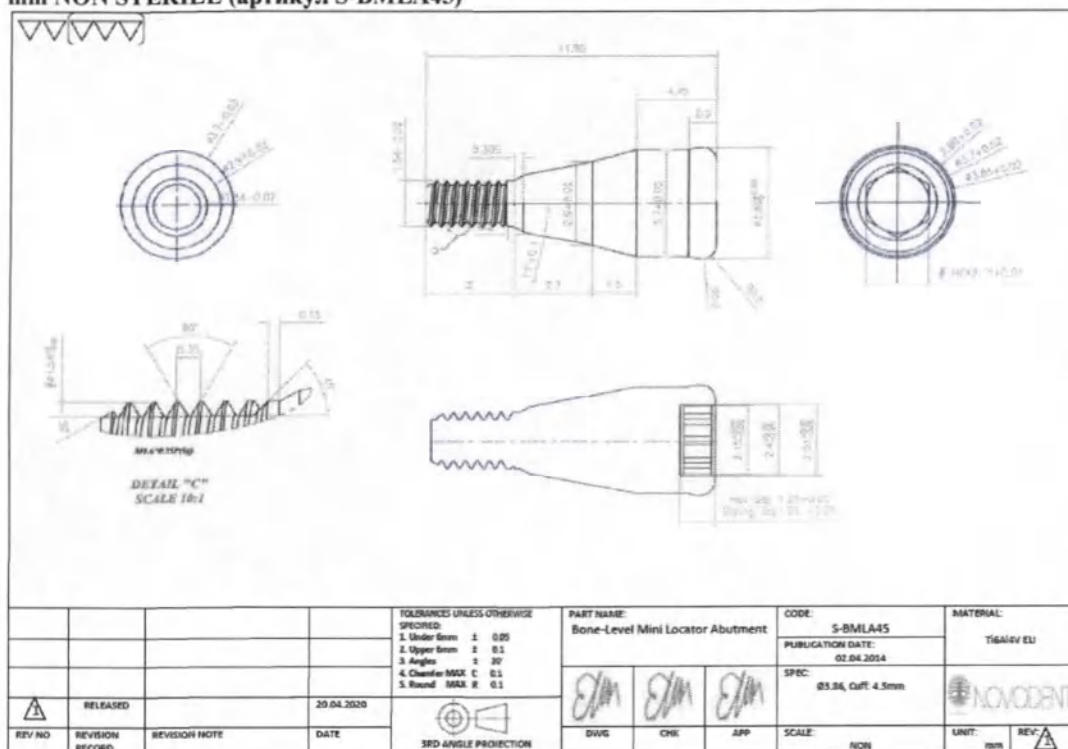Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 4.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA45)




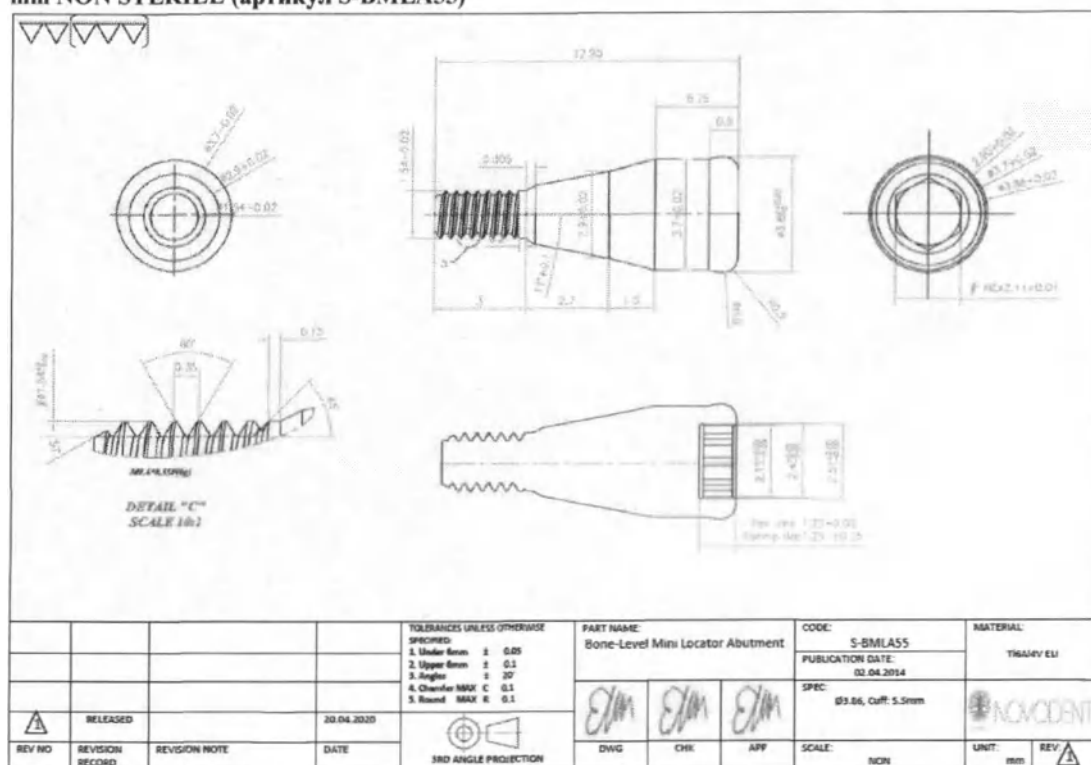Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA55)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

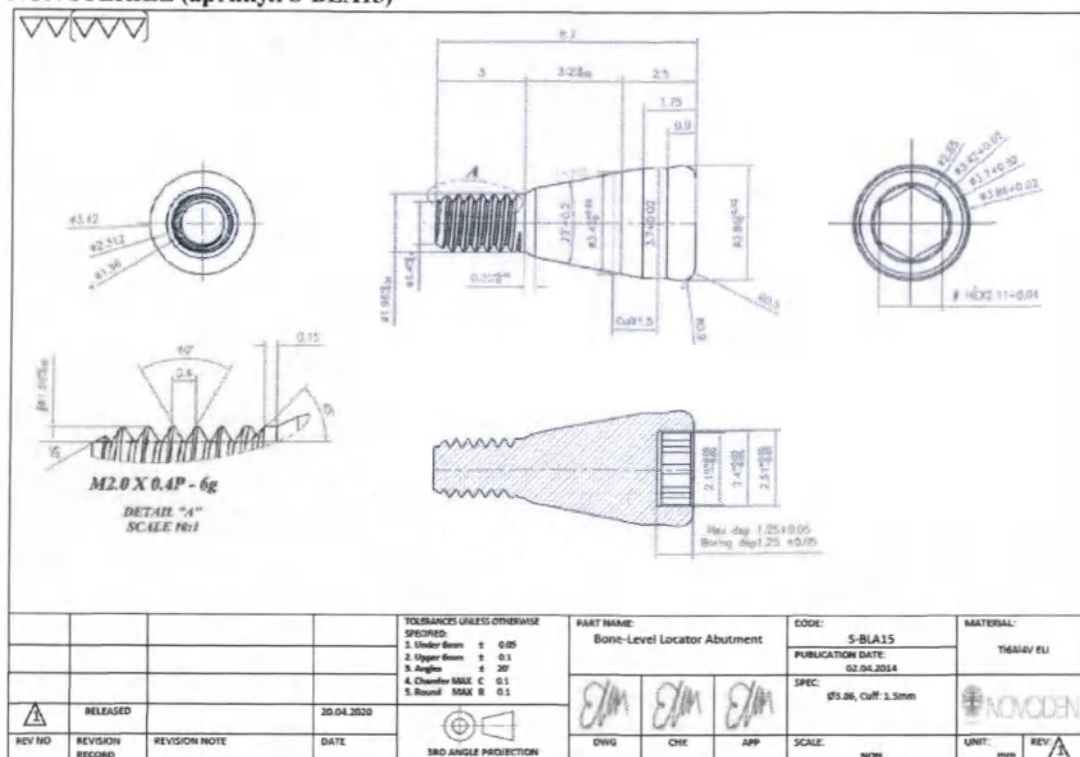**Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 1.5 mm
NON STERILE (артикул S-BLA15)**




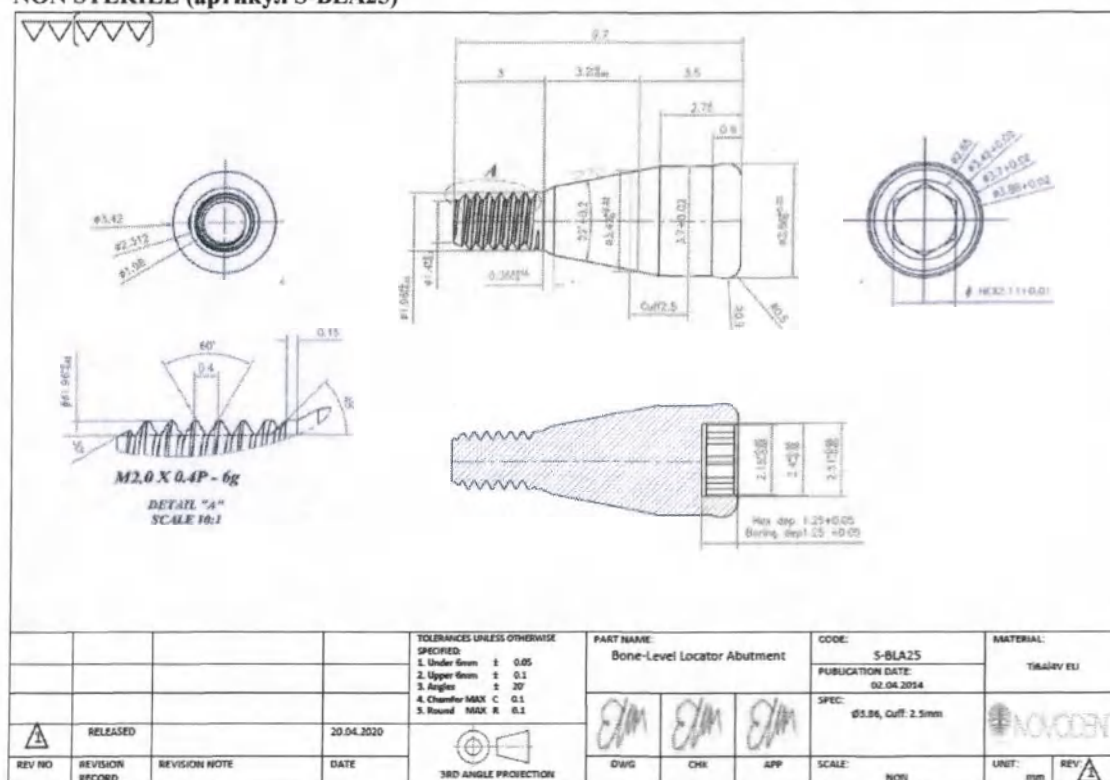**Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 2.5 mm
NON STERILE (артикул S-BLA25)**




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

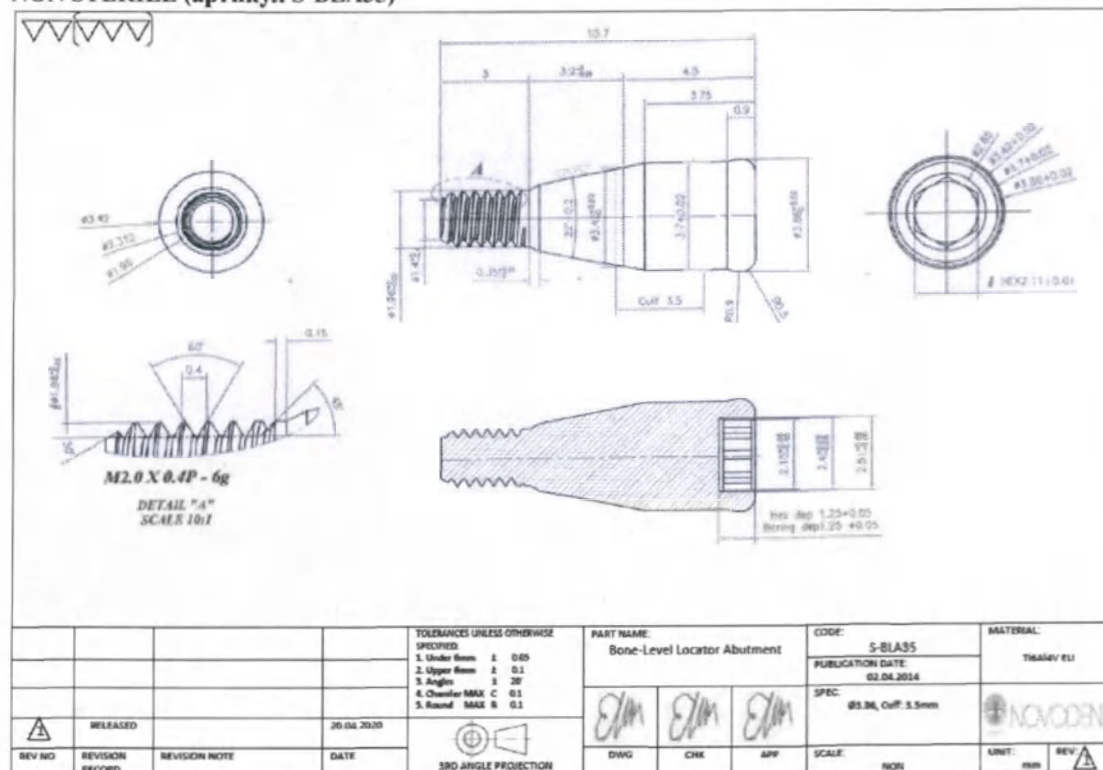**Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 3.5 mm
NON STERILE (артикул S-BLA35)**




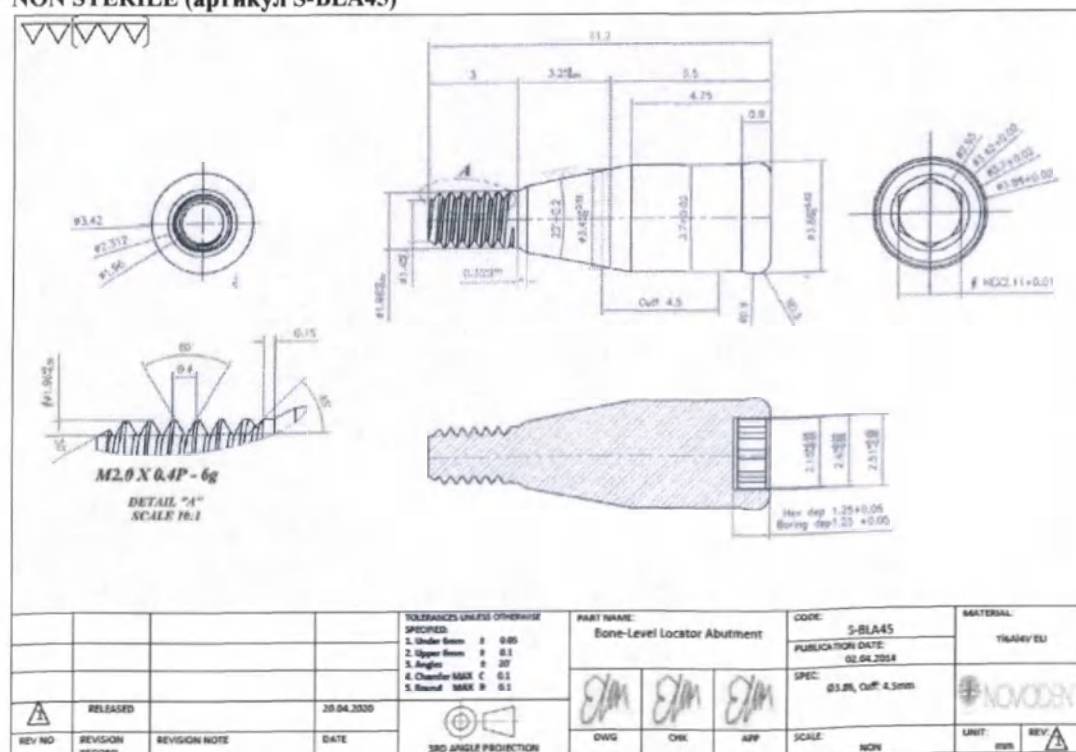**Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 4.5 mm
NON STERILE (артикул S-BLA45)**




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

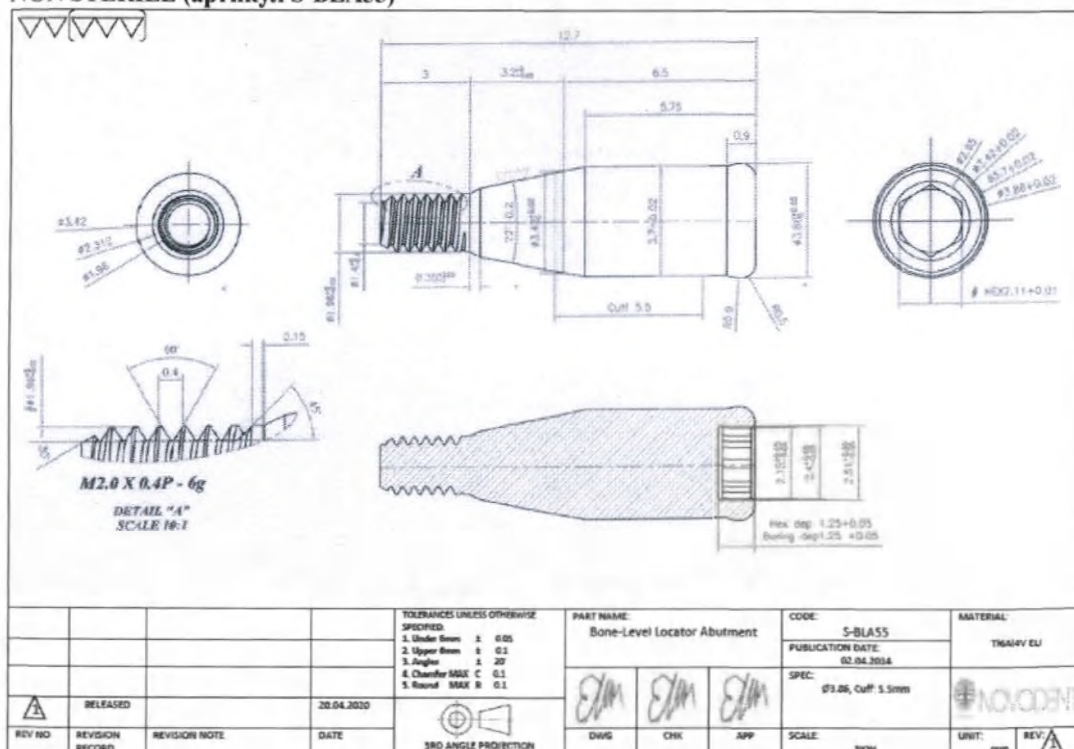**Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 5.5 mm
NON STERILE (артикул S-BLA55)**




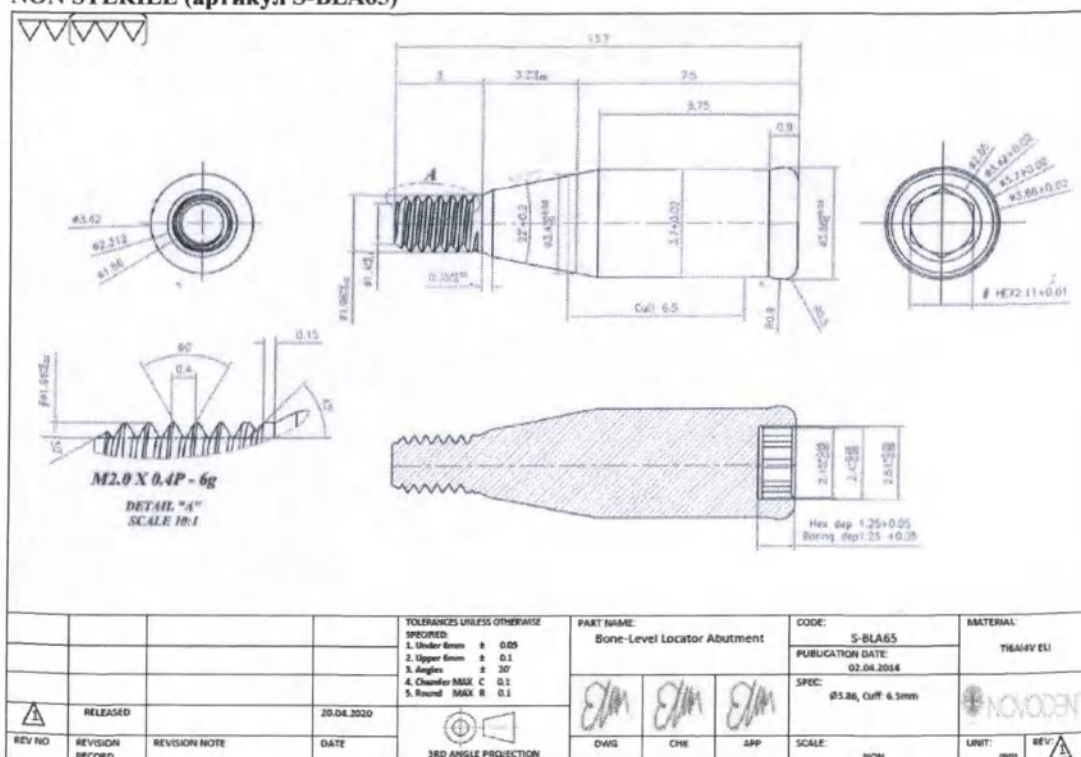**Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 6.5 mm
NON STERILE (артикул S-BLA65)**




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

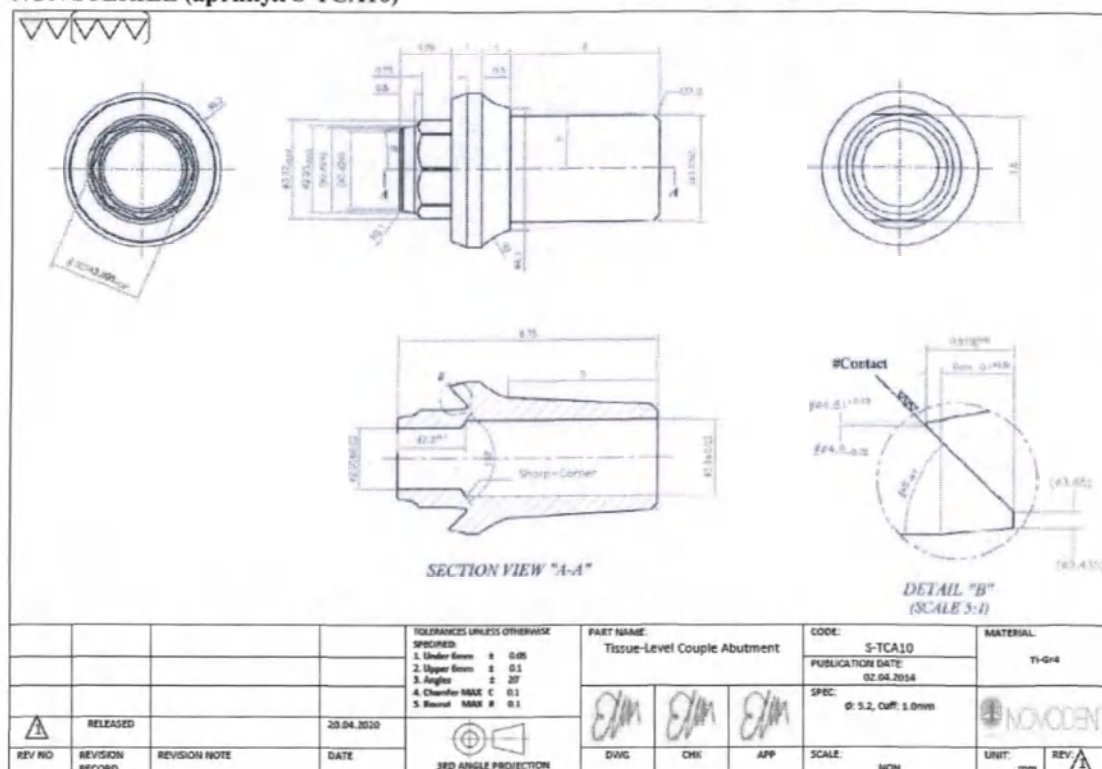
**Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm
NON STERILE (артикул S-TCA10)**



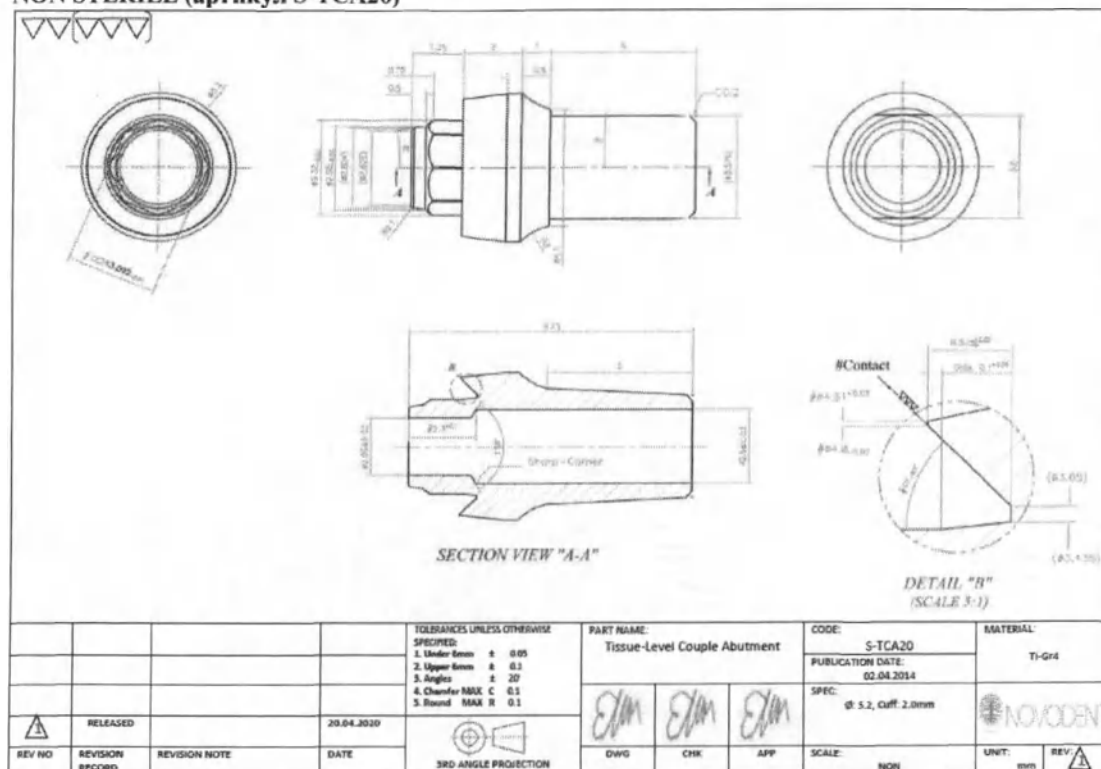
**Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm
NON STERILE (артикул S-TCA20)**



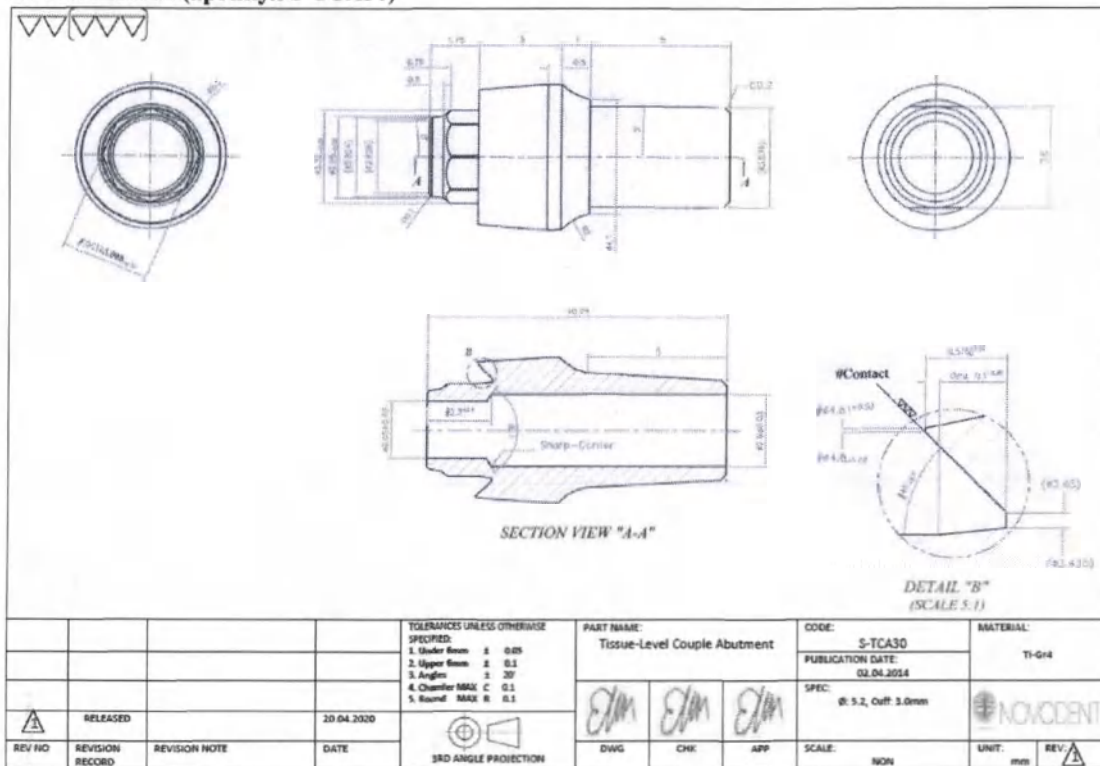Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




NON STERILE (артикул S-TCA40)

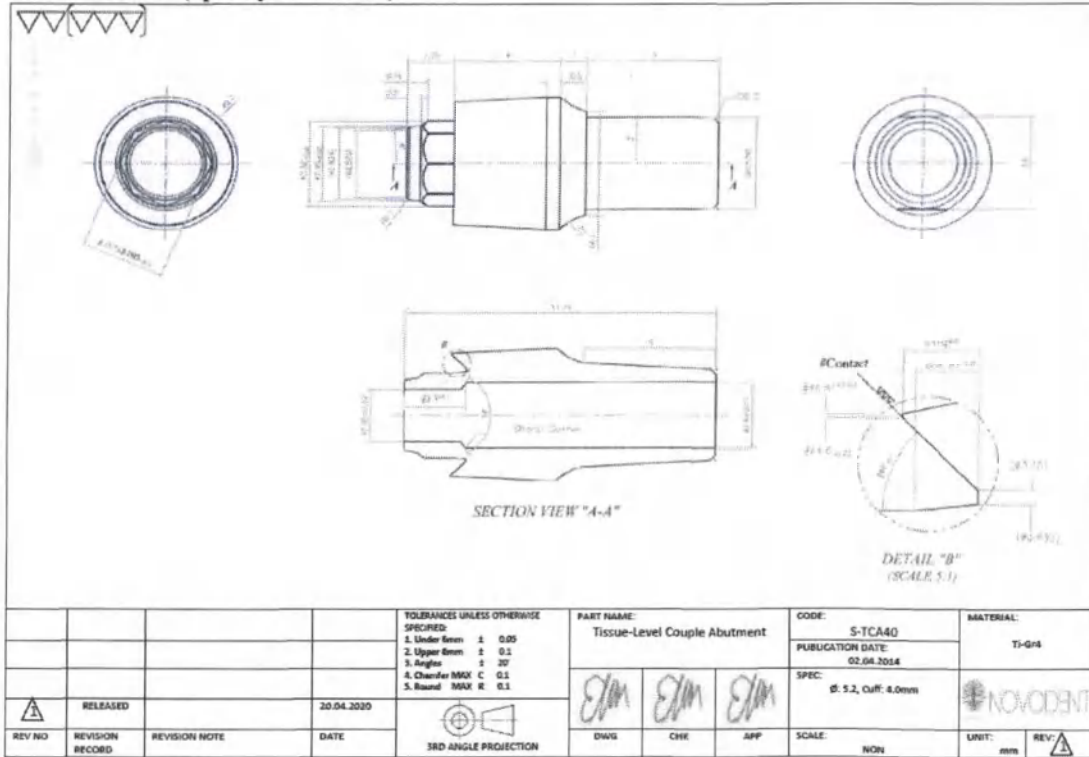


implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

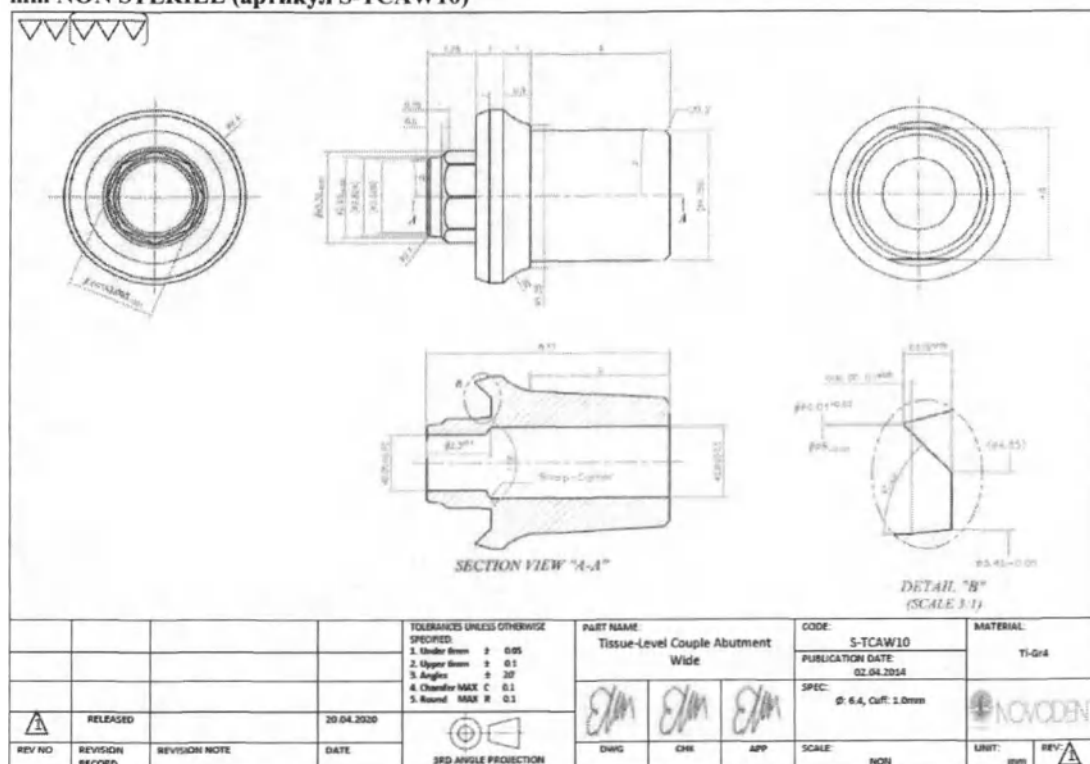Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide , Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW10)




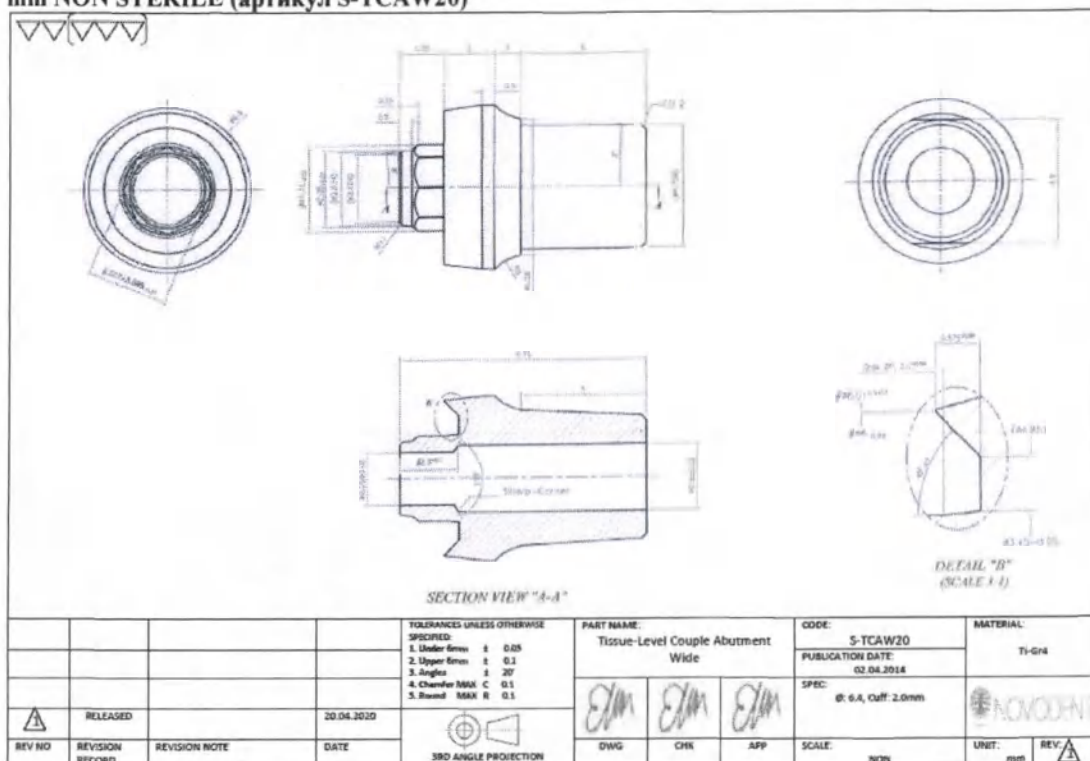Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW20)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

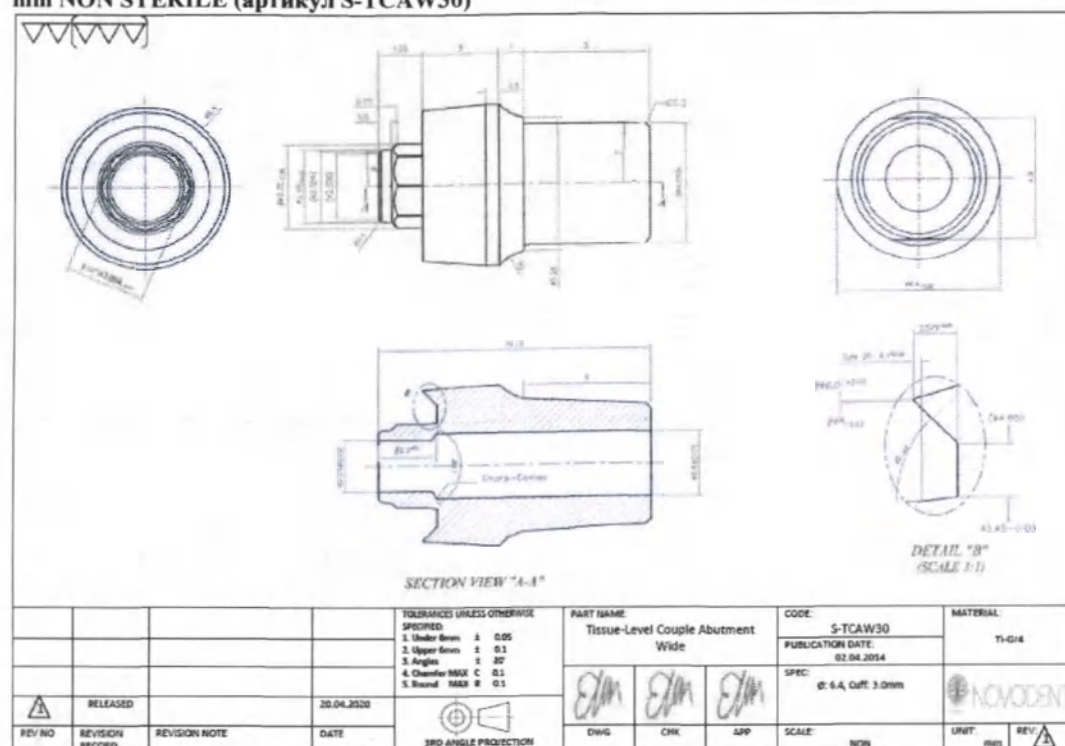Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW30)




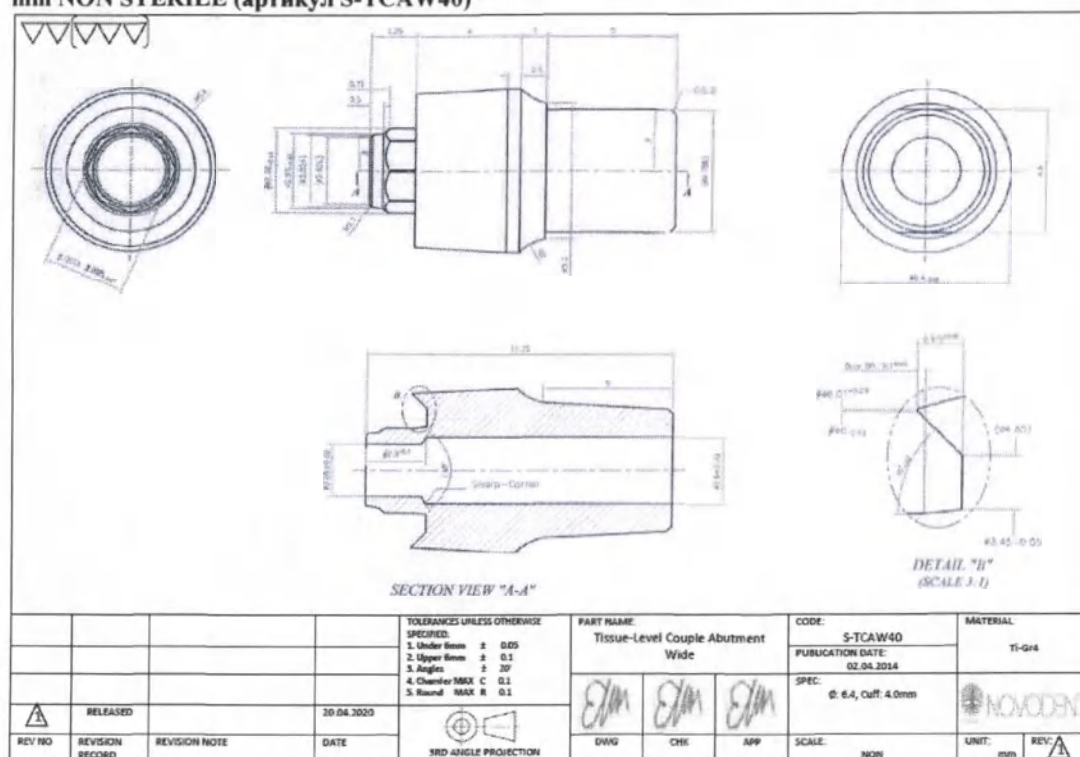Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW40)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

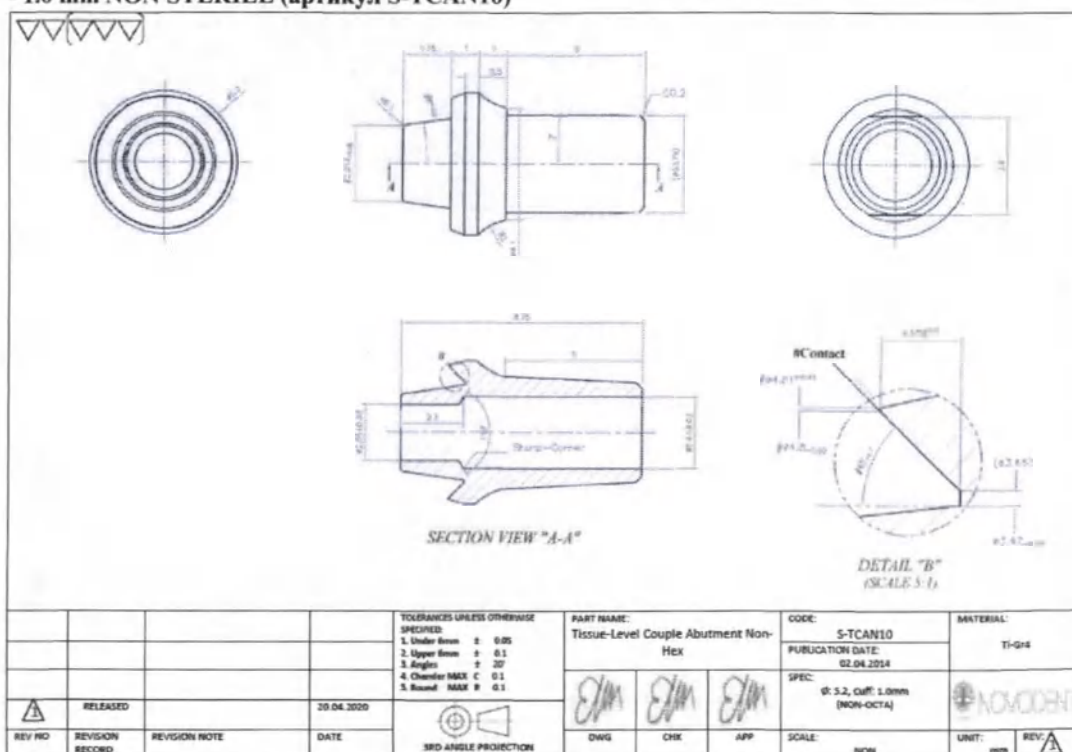Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN10)




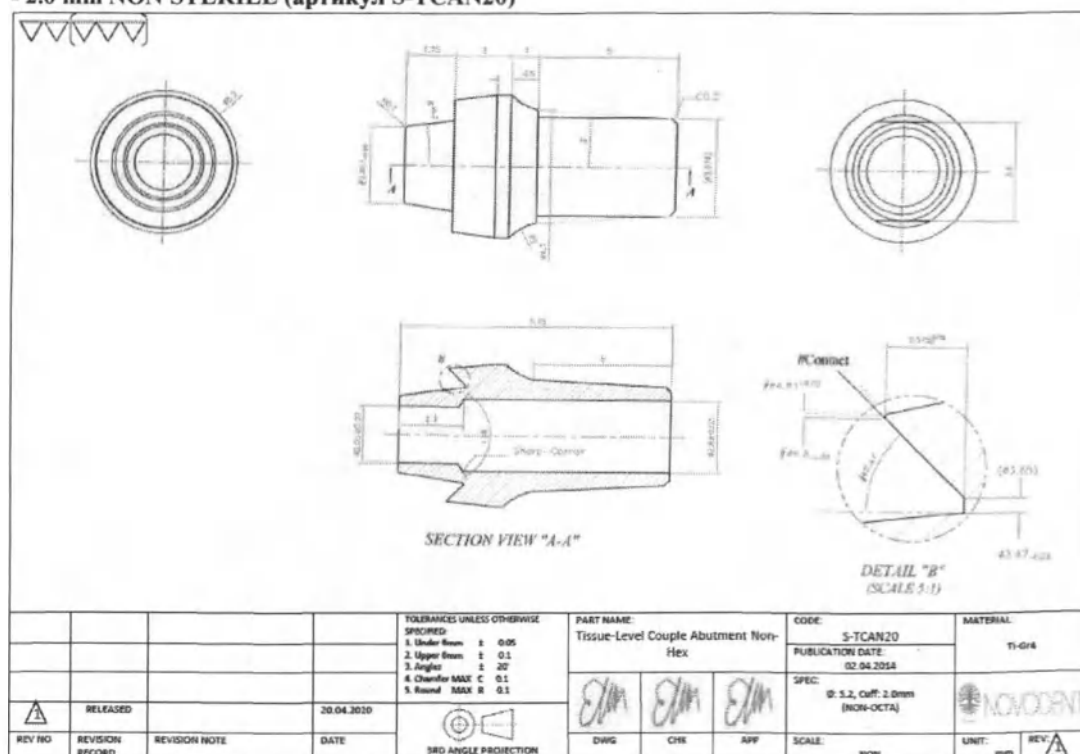Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN20)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

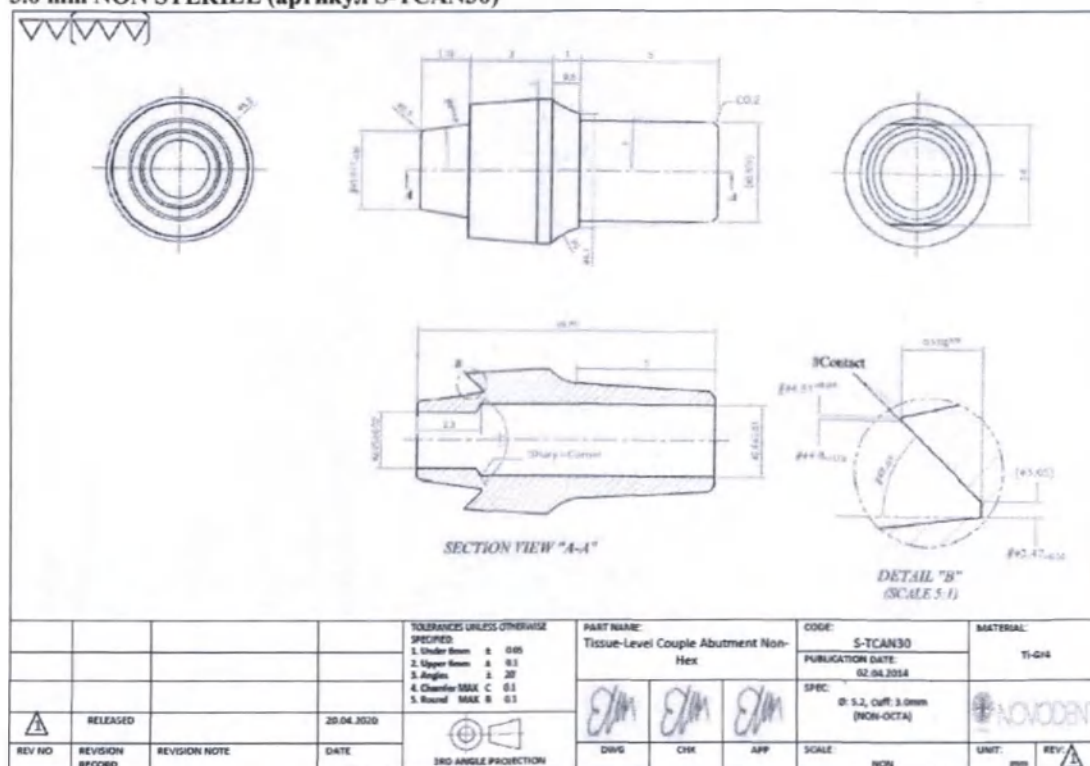Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN30)




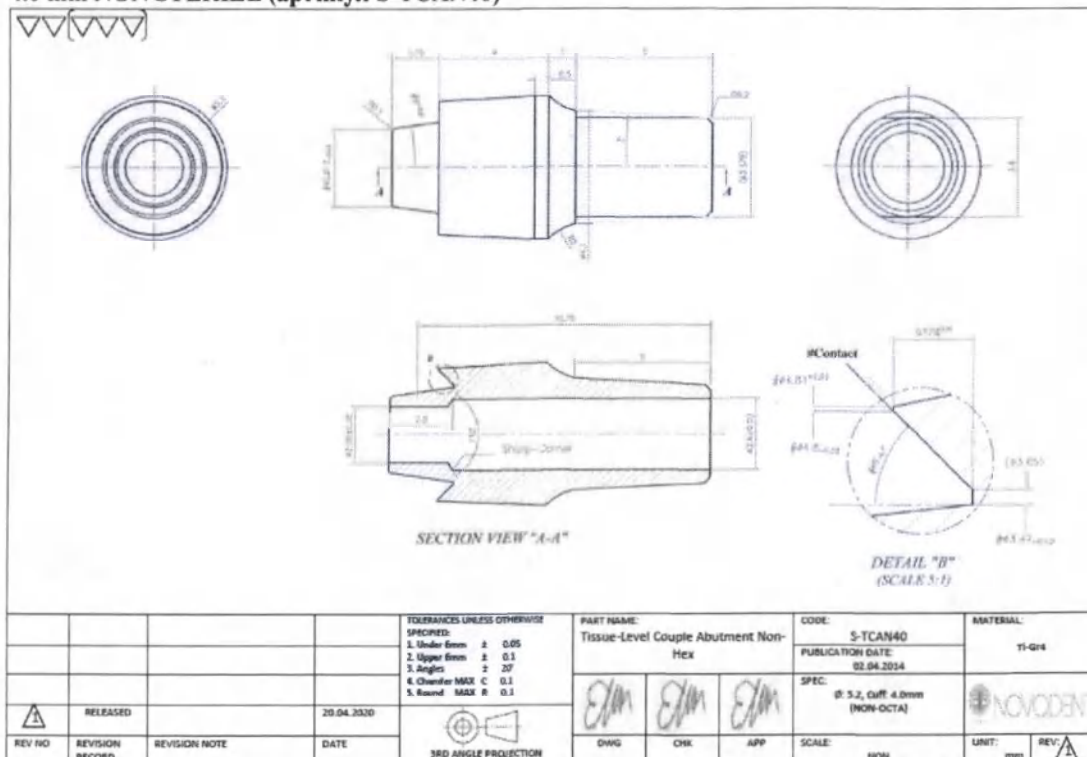Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN40)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

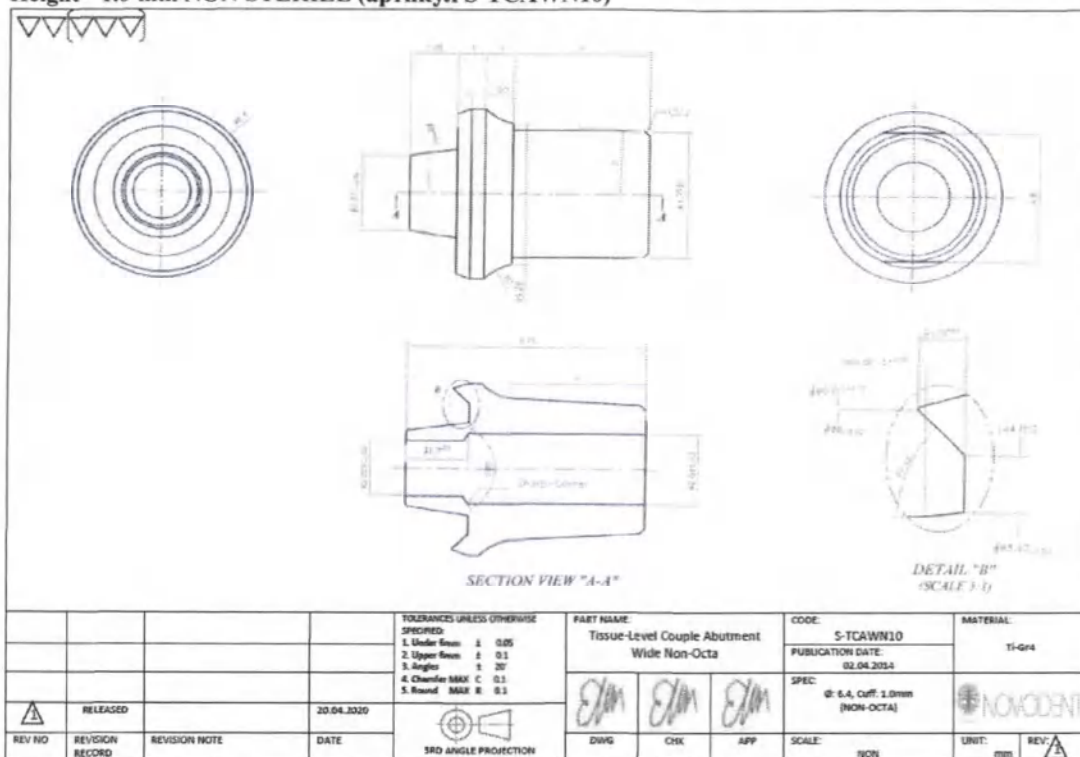Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN10)




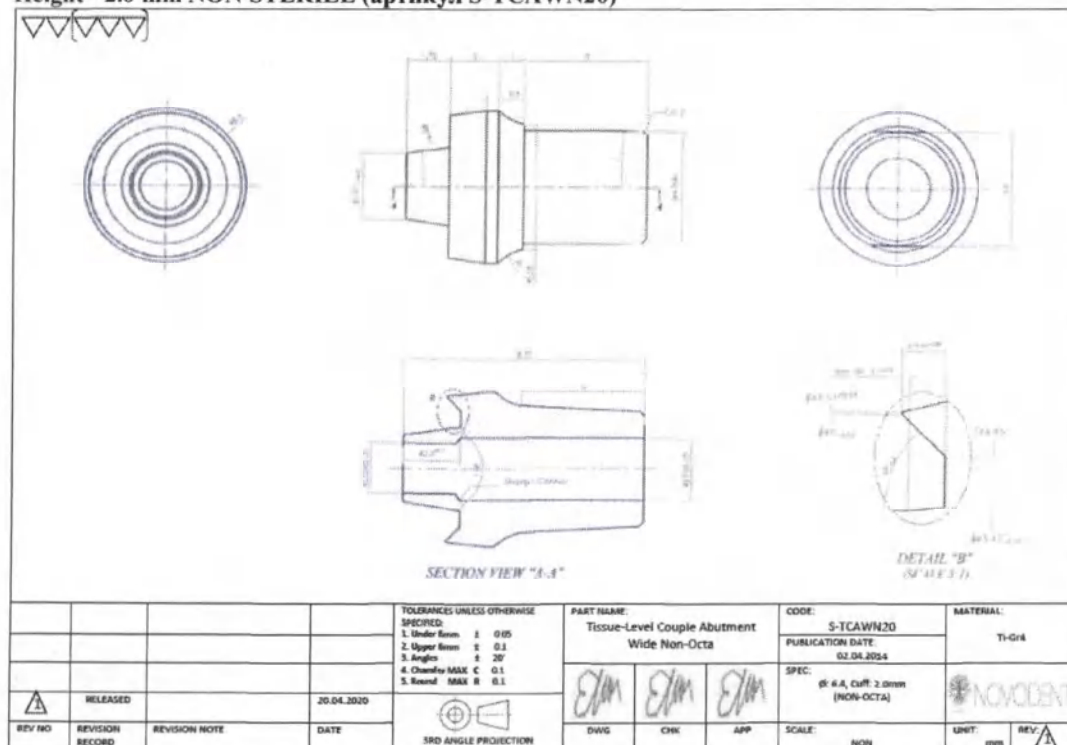Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN20)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

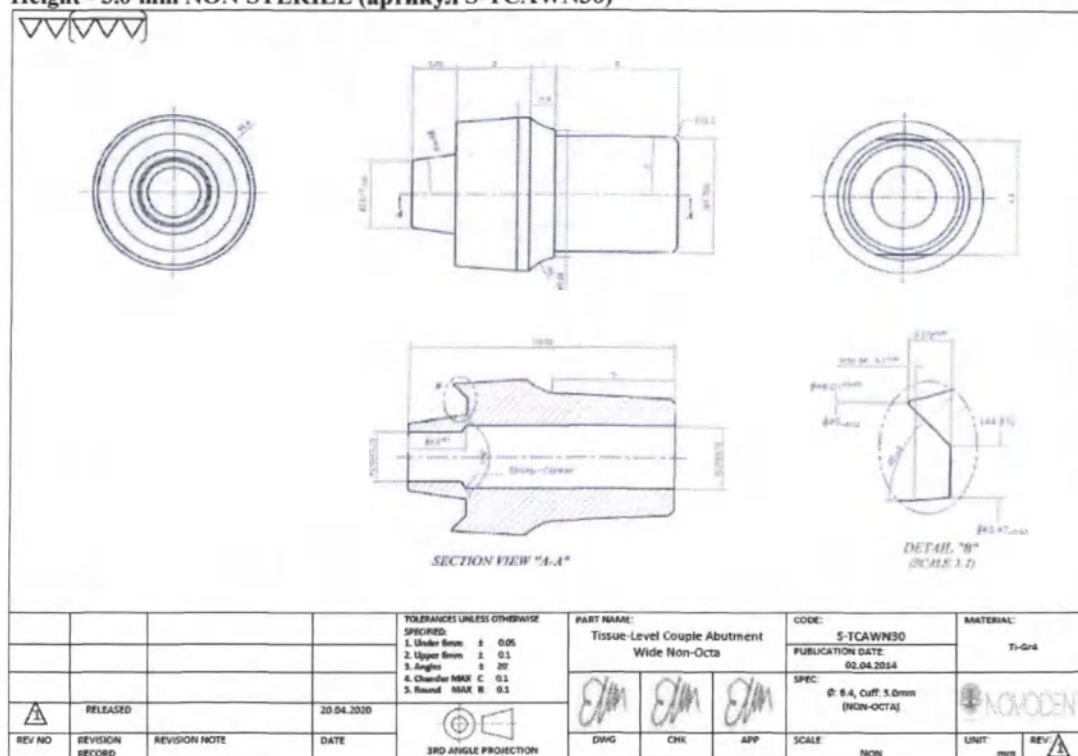Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN30)




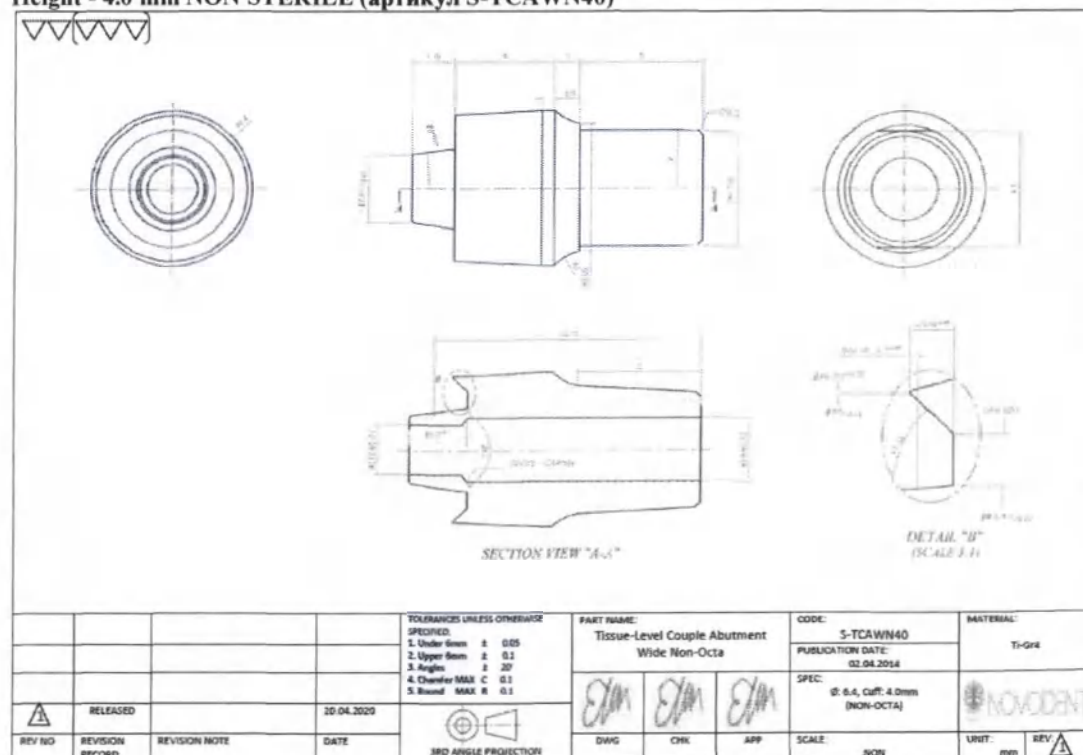Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN40)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

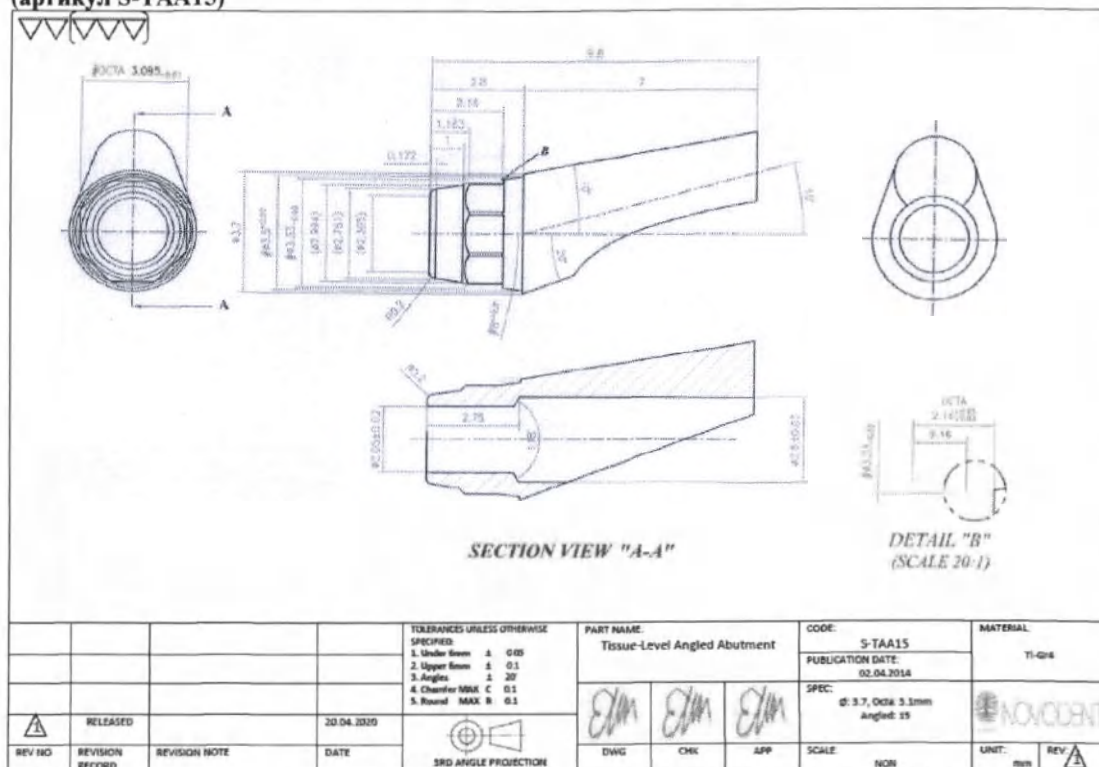Абатмент Implantswiss Tissue Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15° NON STERILE
(артикул S-TAA15)




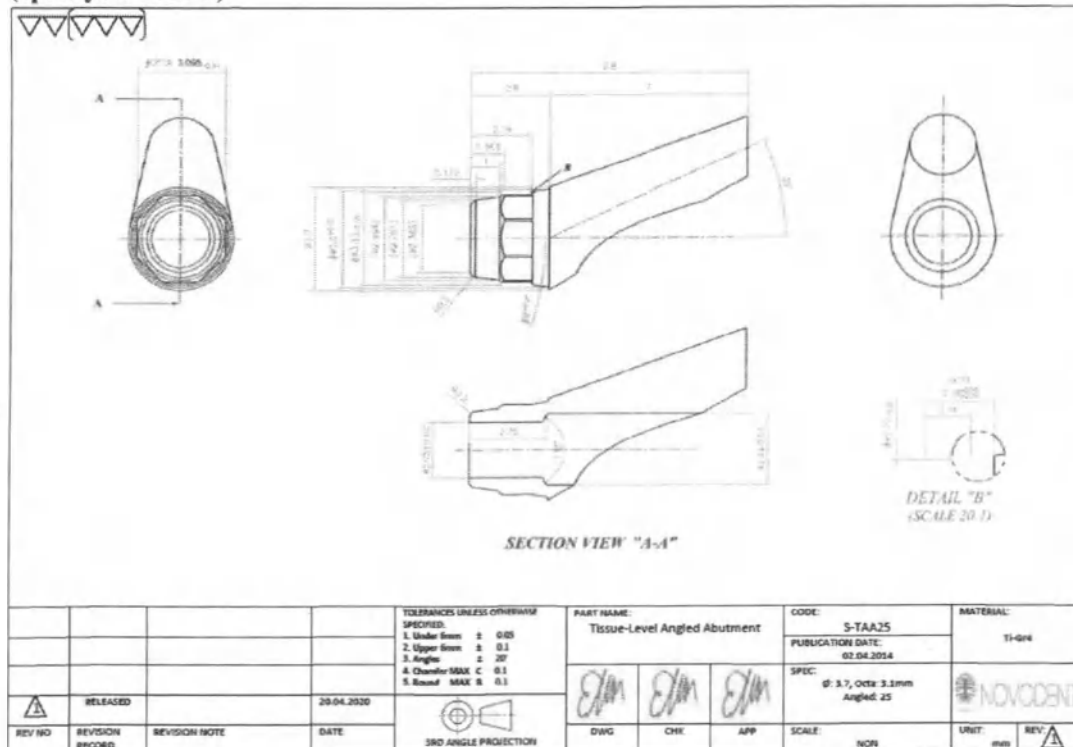Абатмент Implantswiss Tissue Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 25° NON STERILE
(артикул S-TAA25)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

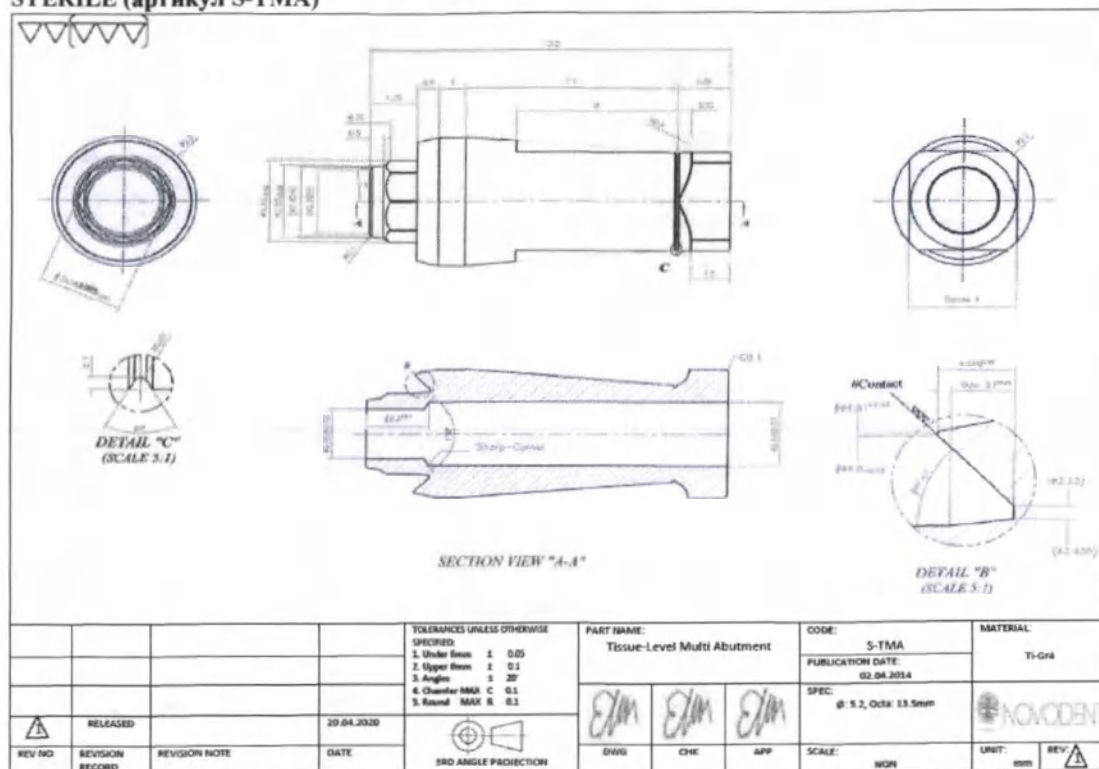Абатмент Implantswiss Tissue Level Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Length - 13.5 mm NON STERILE (артикул S-TMA)




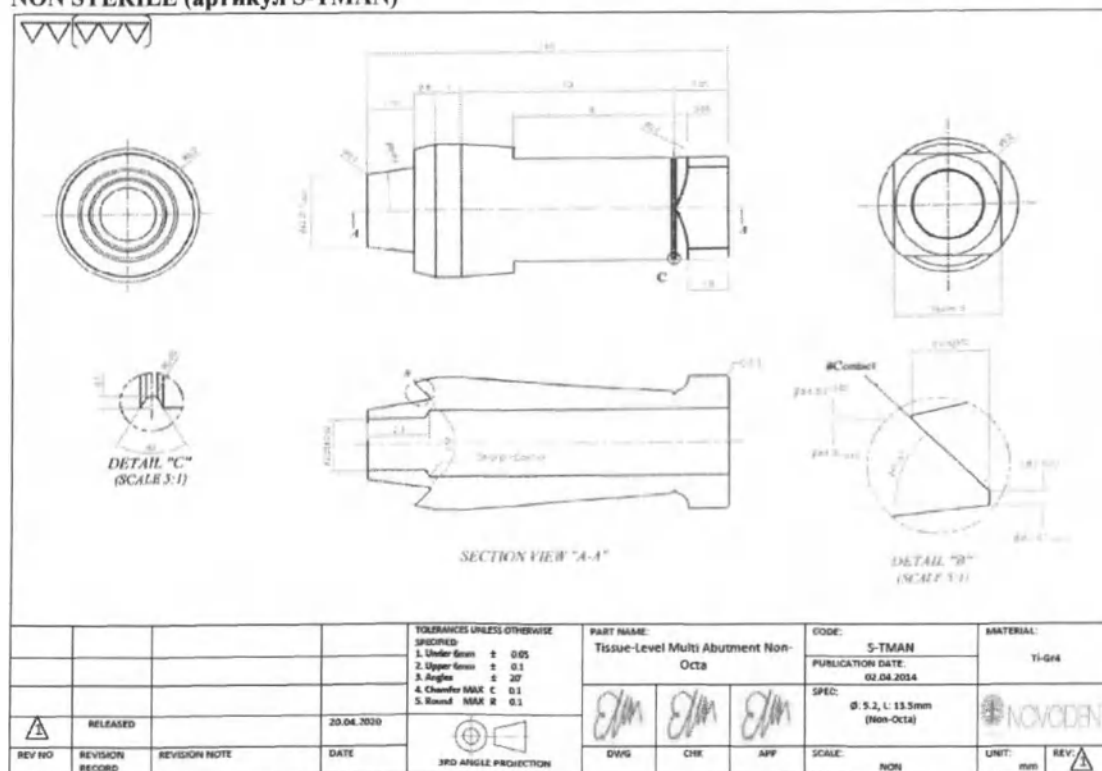Абатмент Implantswiss Tissue Level Multi Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Length - 13.5 mm NON STERILE (артикул S-TMAN)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

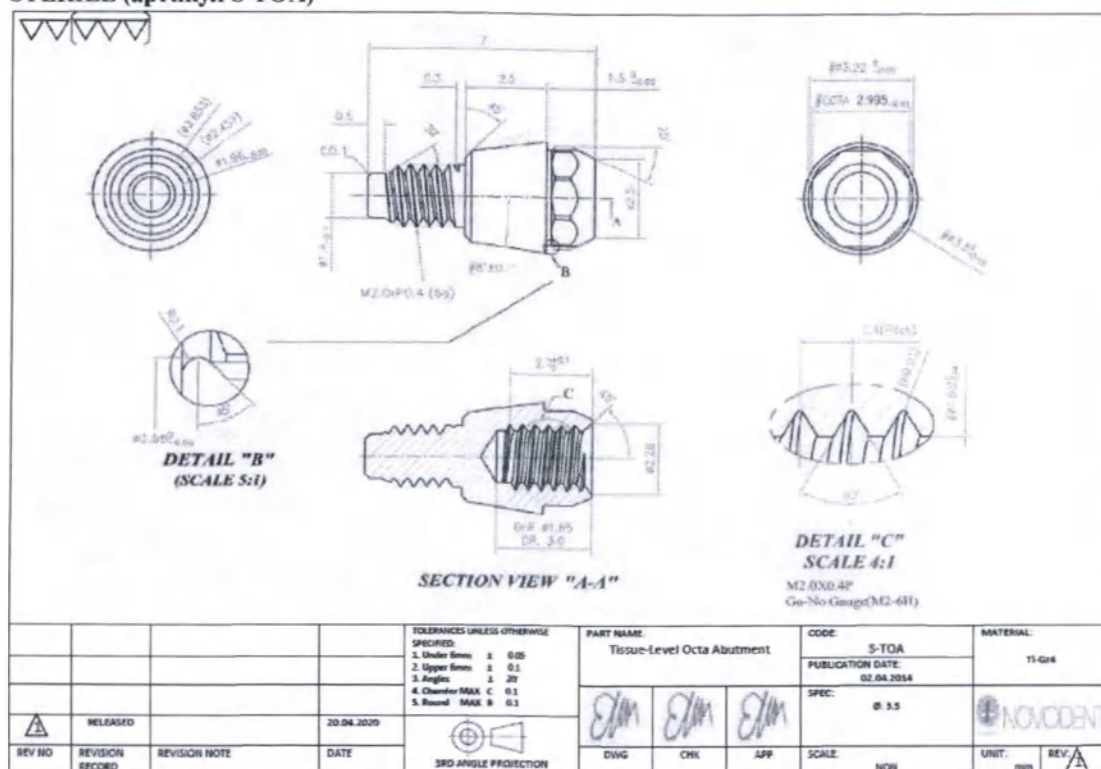Абатмент Implantswiss Tissue Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Length - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-TOA)



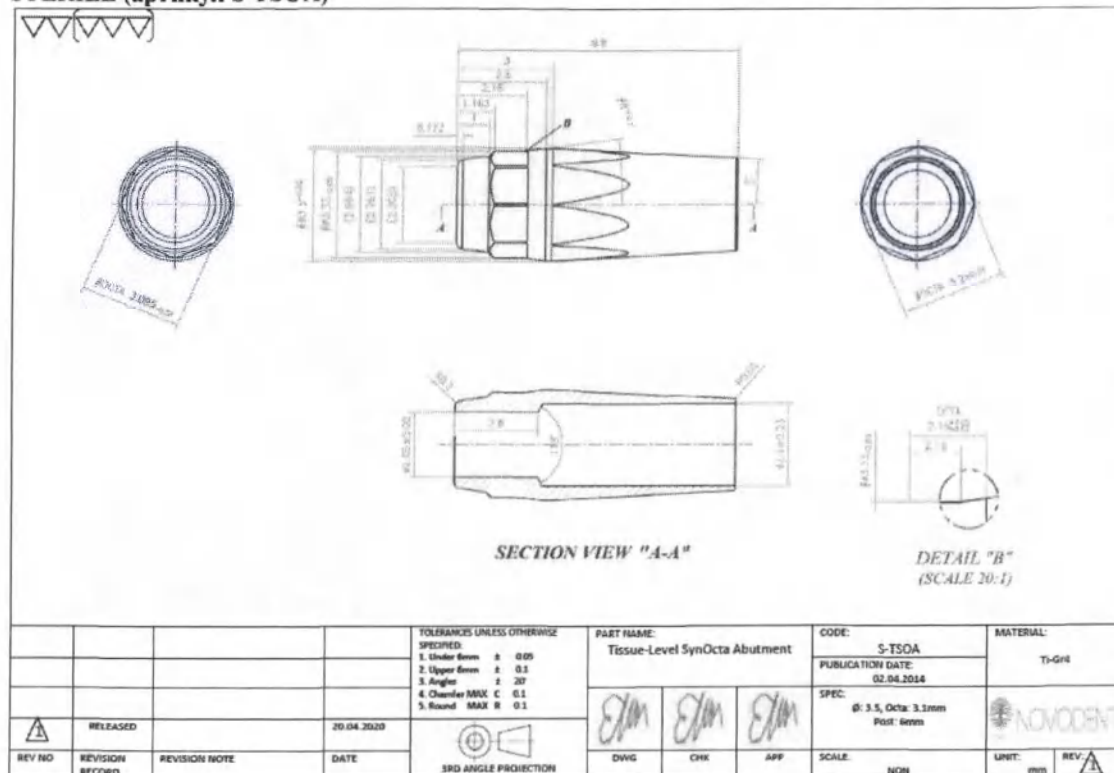Абатмент Implantswiss Tissue Level SynOcta Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Length - 8.8 mm NON STERILE (артикул S-TSOA)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


[illegible]

Страница 80 из 344

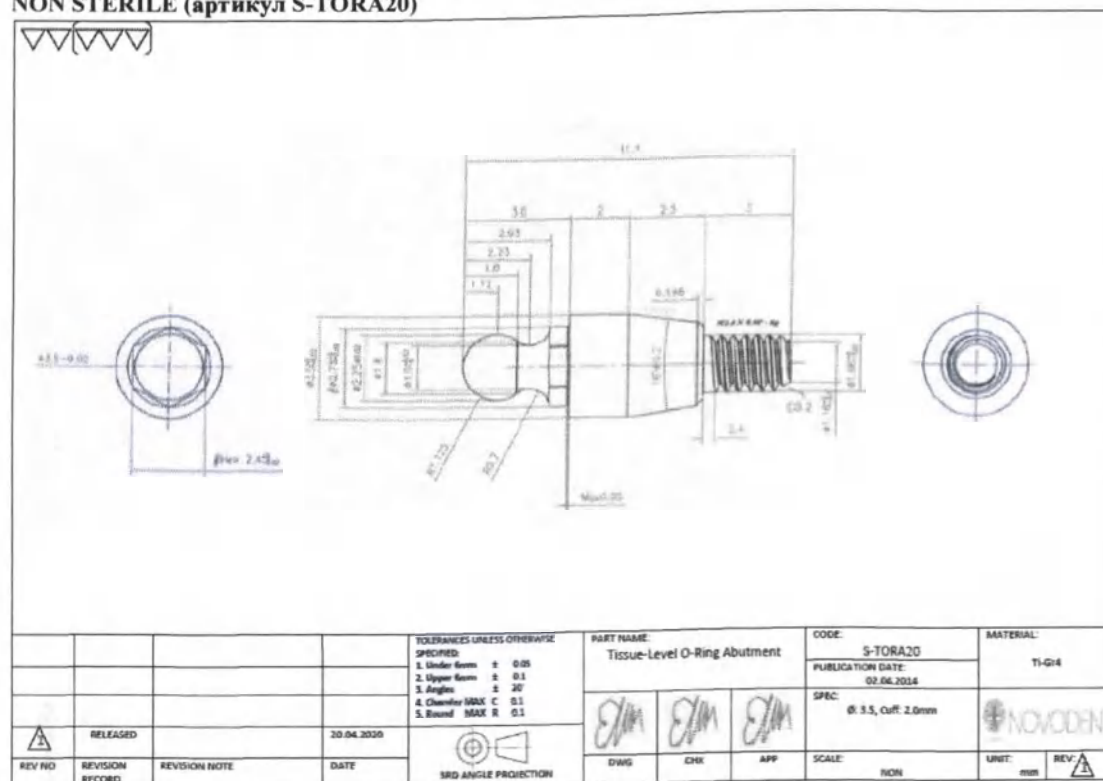**Абатмент Implantswiss Tissue Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm
NON STERILE (артикул S-TORA20)**




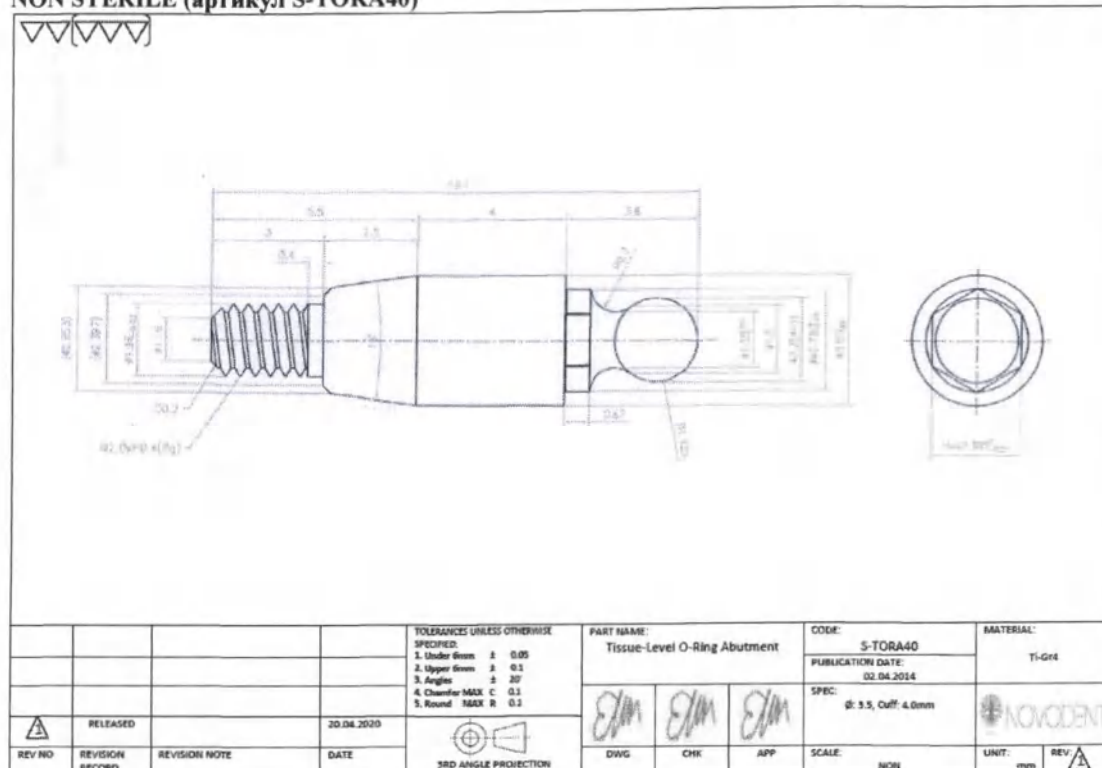**Абатмент Implantswiss Tissue Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm
NON STERILE (артикул S-TORA40)**




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

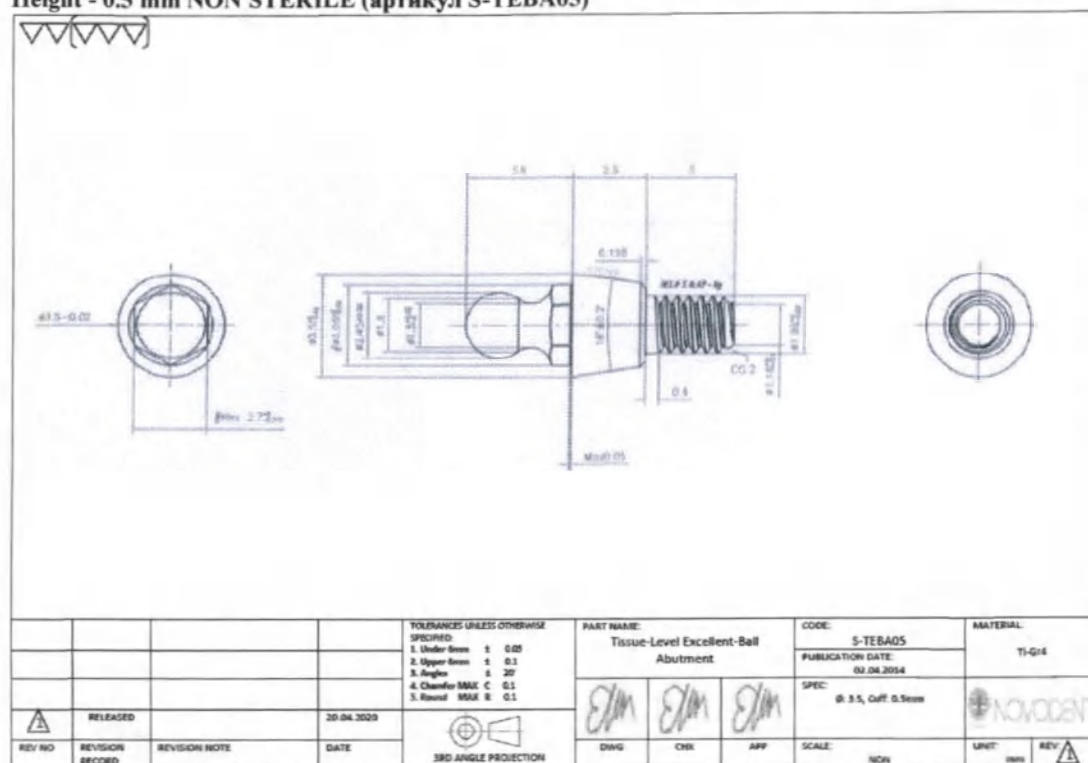Абатмент Implantswiss Tissue Level Superb Overdenture Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-TEBA05)



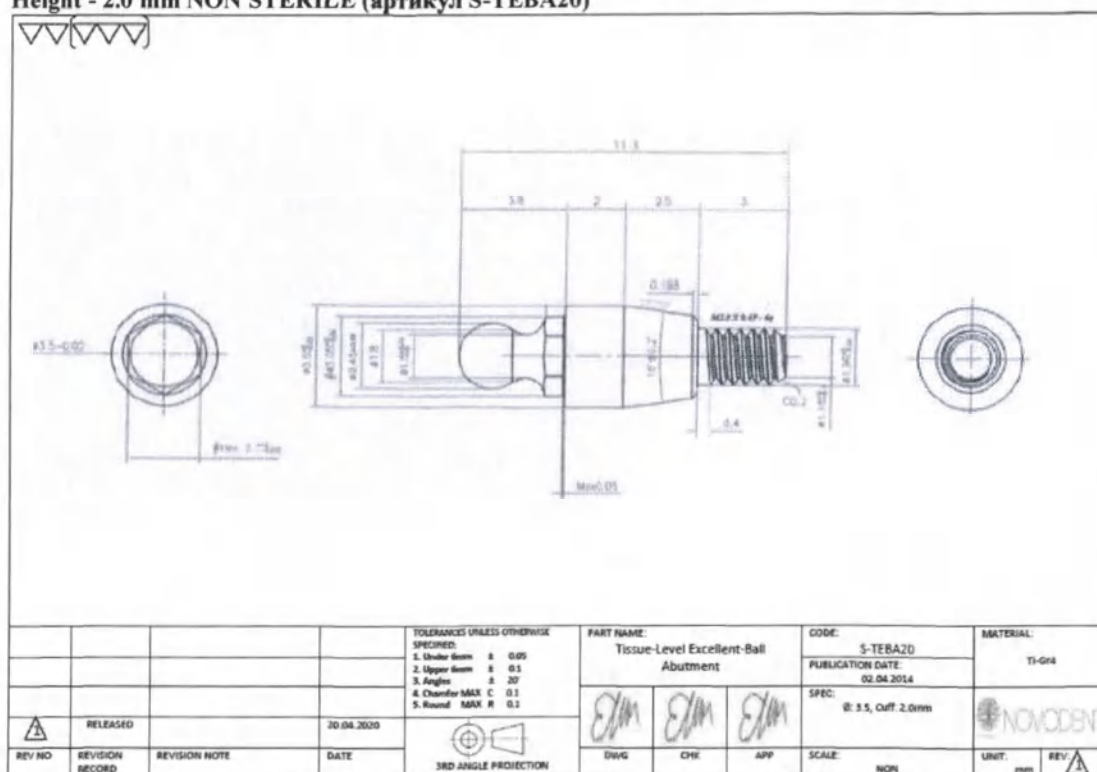Абатмент Implantswiss Tissue Level Superb Overdenture Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TEBA20)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

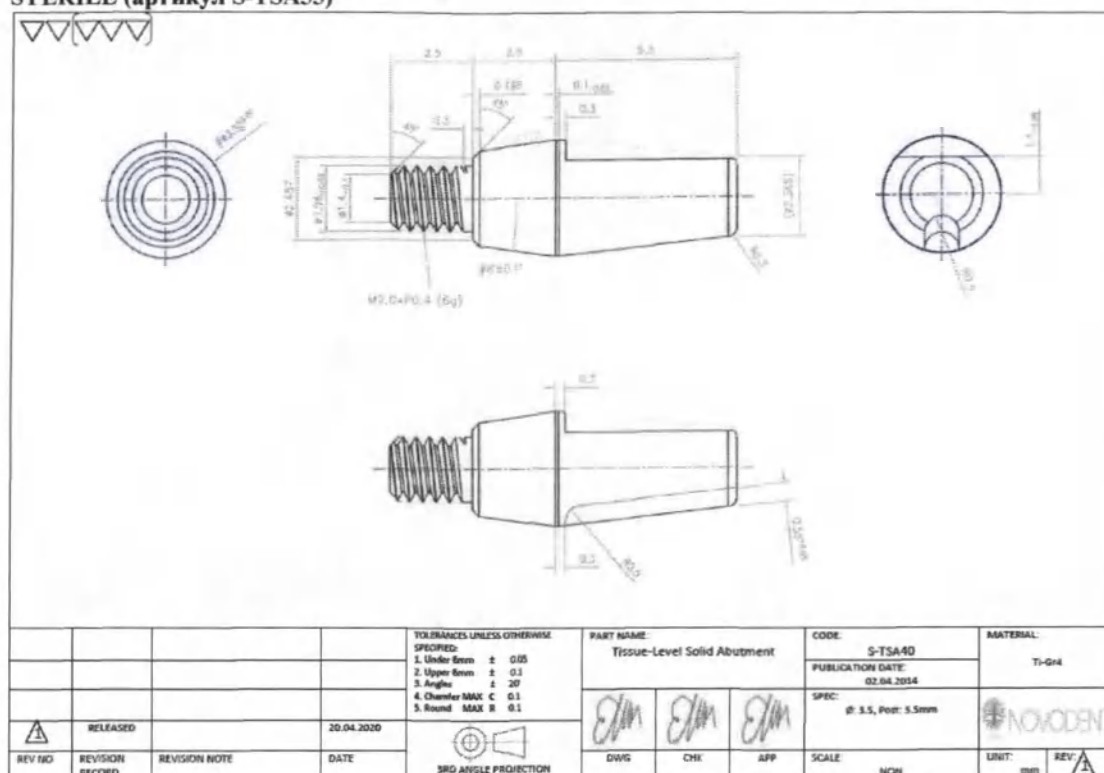Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-TSA55)




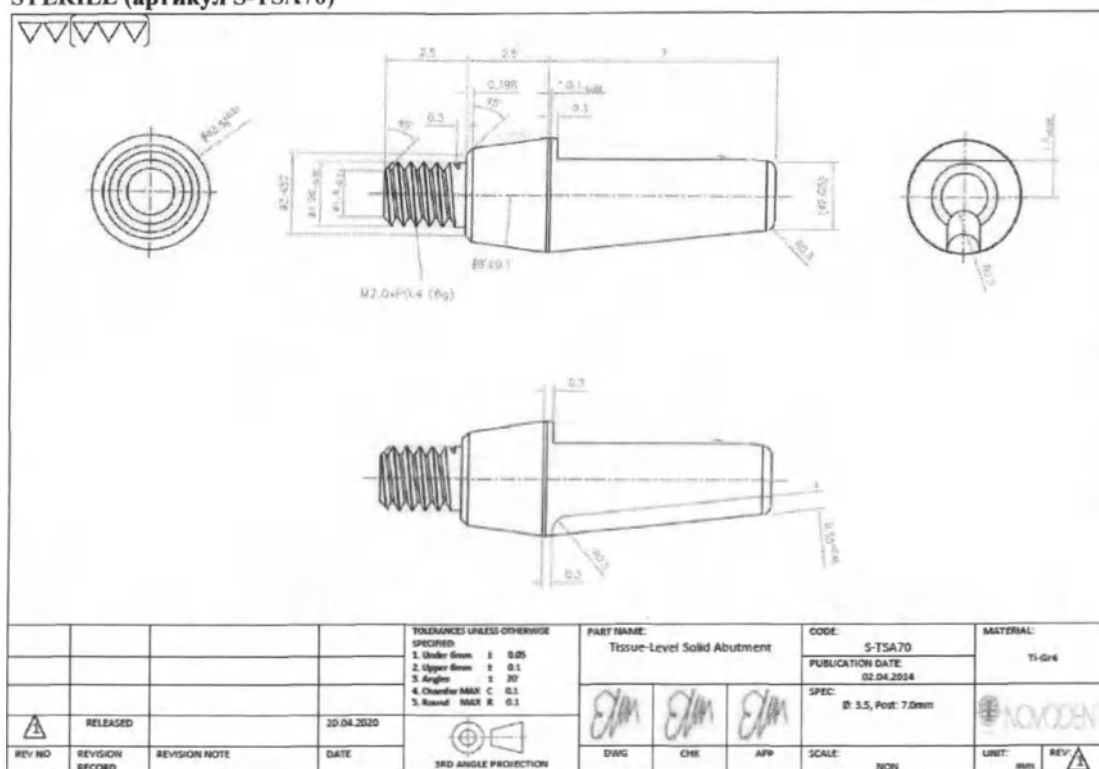Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-TSA70)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

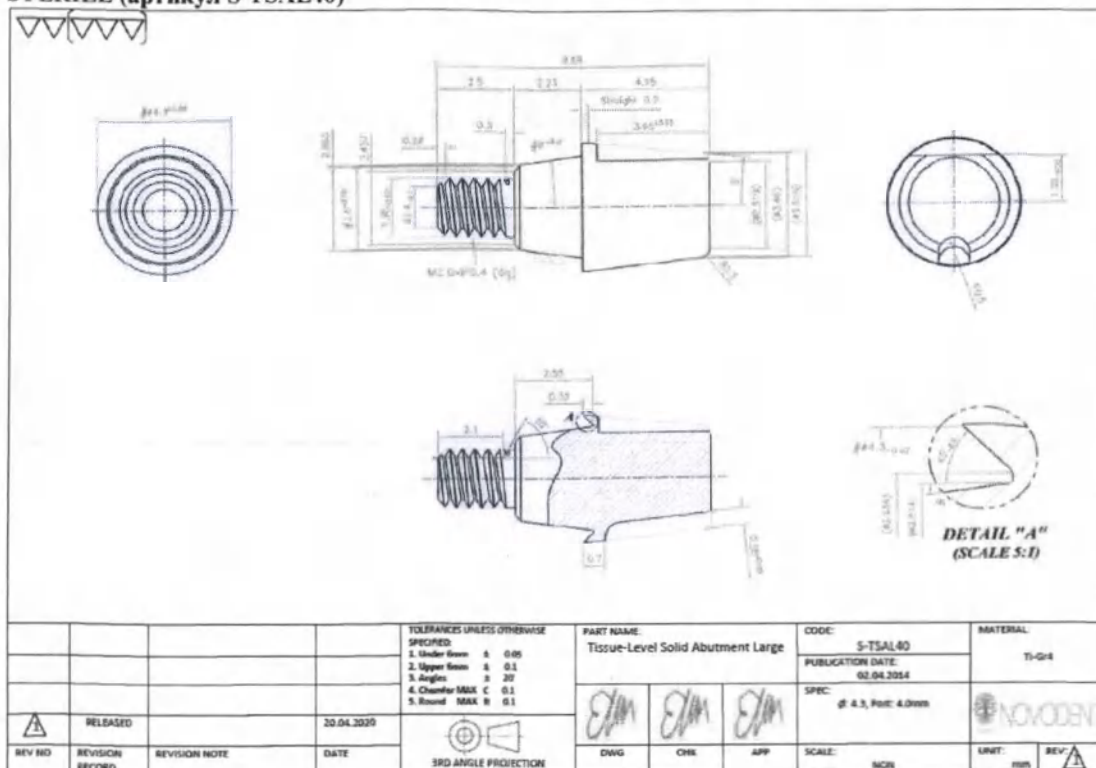Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large, Dimensions: Diameter - 4.3 mm, Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TSAL40)




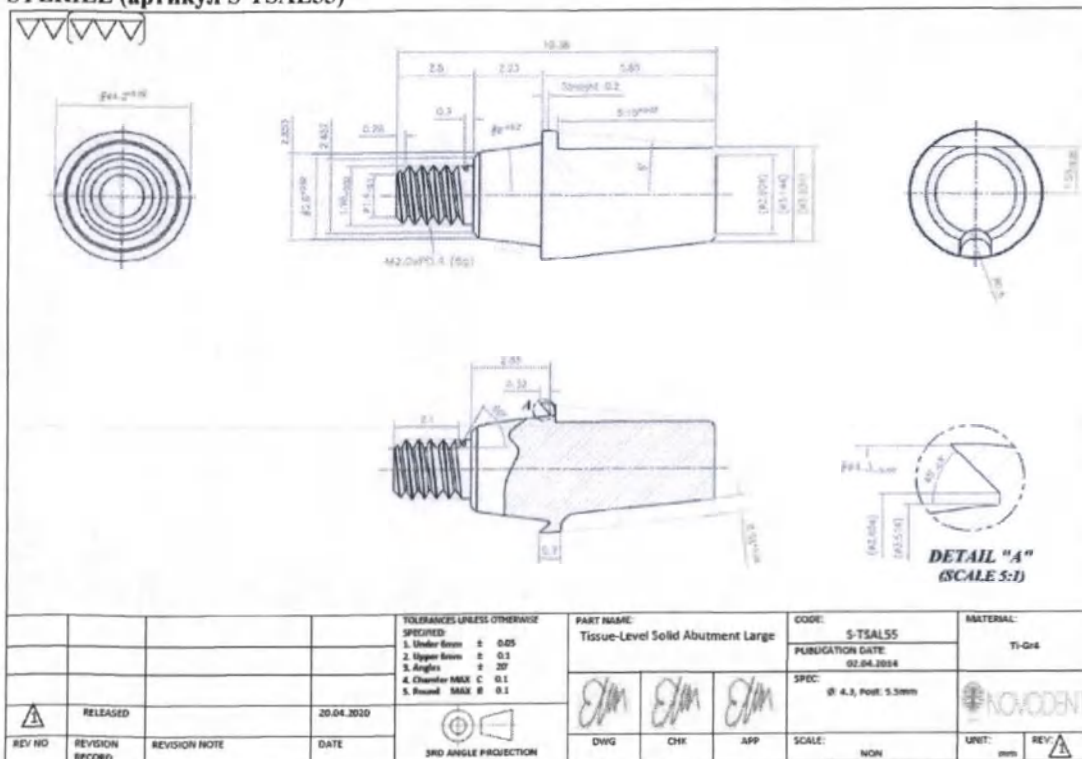Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large, Dimensions: Diameter - 4.3 mm, Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-TSAL55)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

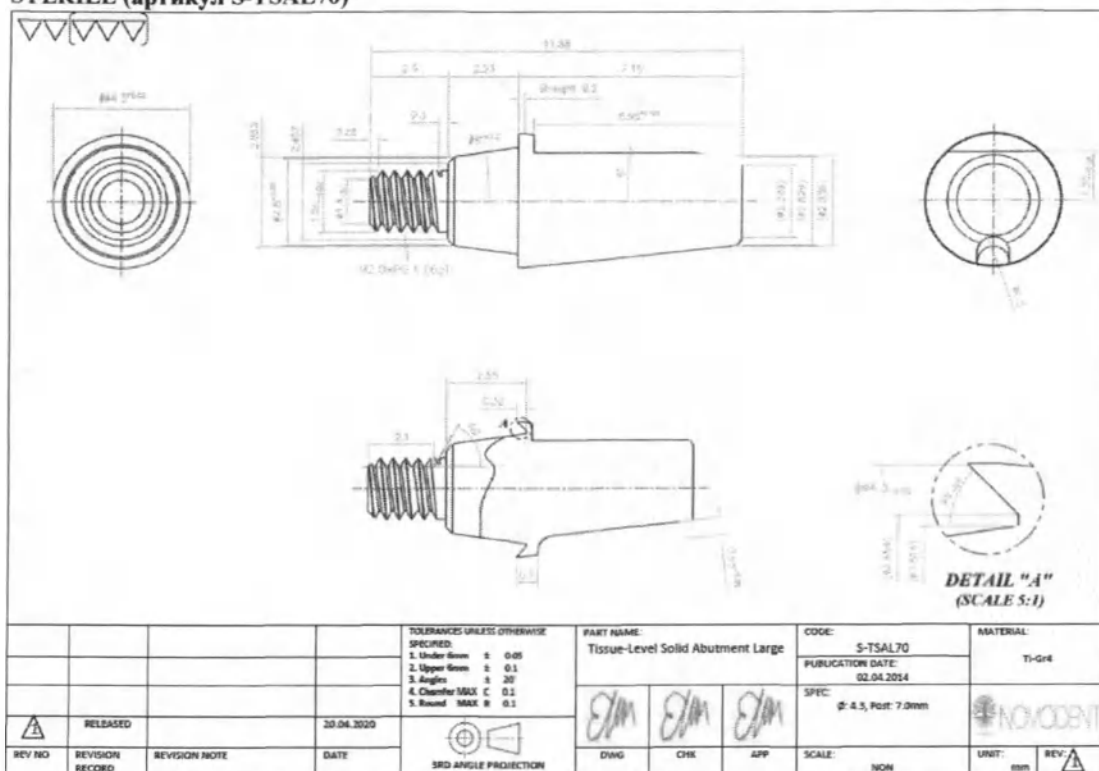Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large, Dimensions: Diameter - 4.3 mm, Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-TSAL70)



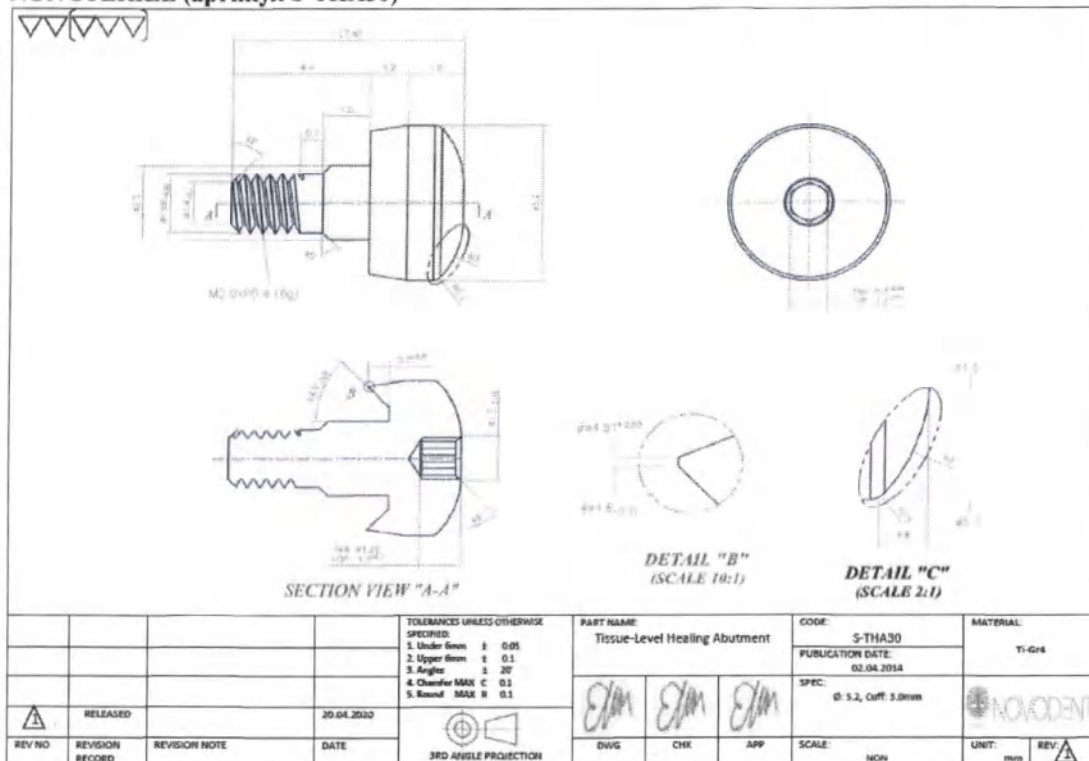Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-THA30)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


REV NO	REVISION RECORD	REVISION NOTE	DATE	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1. Under forms ± 0.05 2. Upper limits ± 0.1 3. Angles ± 20° 4. Chamfers MAX C 0.1 5. Round MAX R 0.1	PART NAME: Tissue-Level Healing Abutment	CODE: S-THA40	MATERIAL: Ti-6Al-4V
1	RELEASED		20.04.2020	3RD ANGLE PROJECTION	 DWG	 CHK	 APP
						SPEC: Ø: 5.2, Cuff: 4.0mm	 UNIT
						SCALE: 1:1	REV: A

Страница 87 из 344

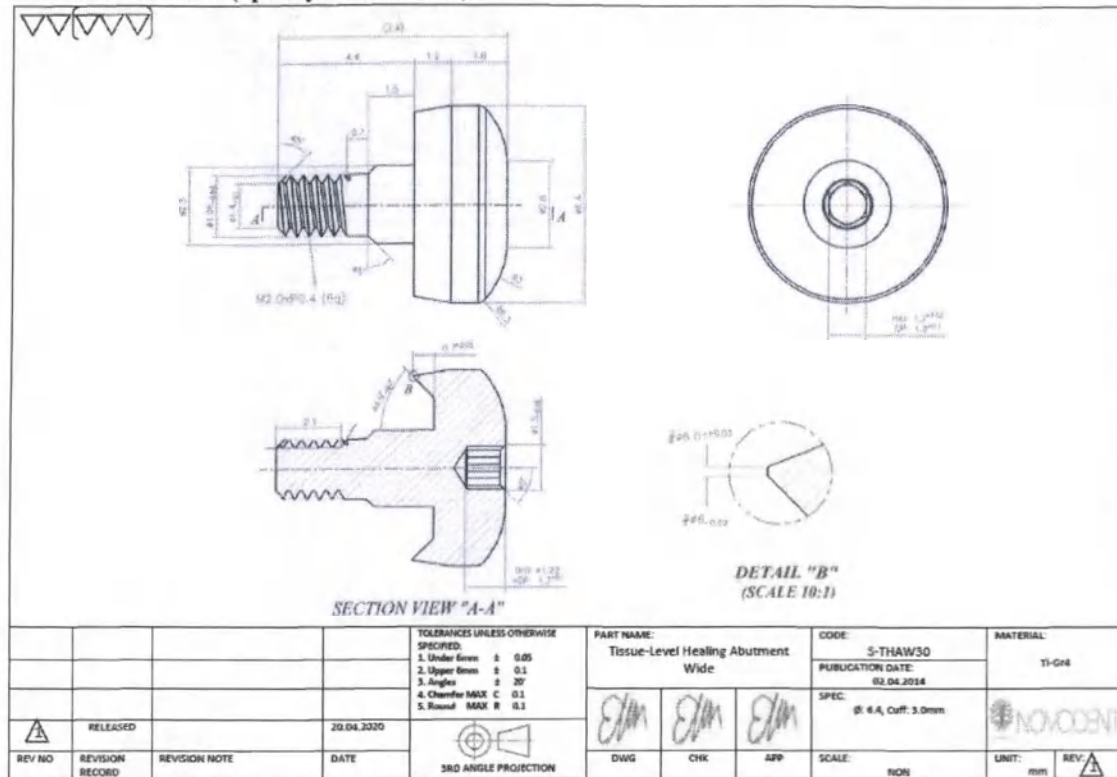Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-THAW30)




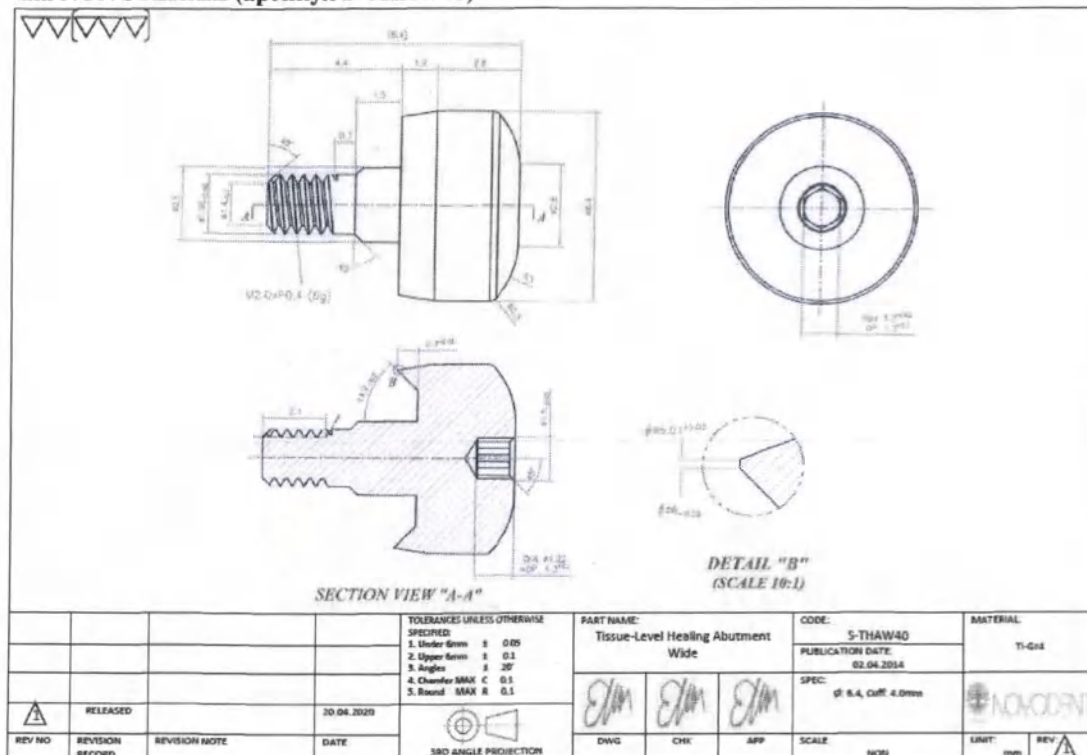Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-THAW40)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

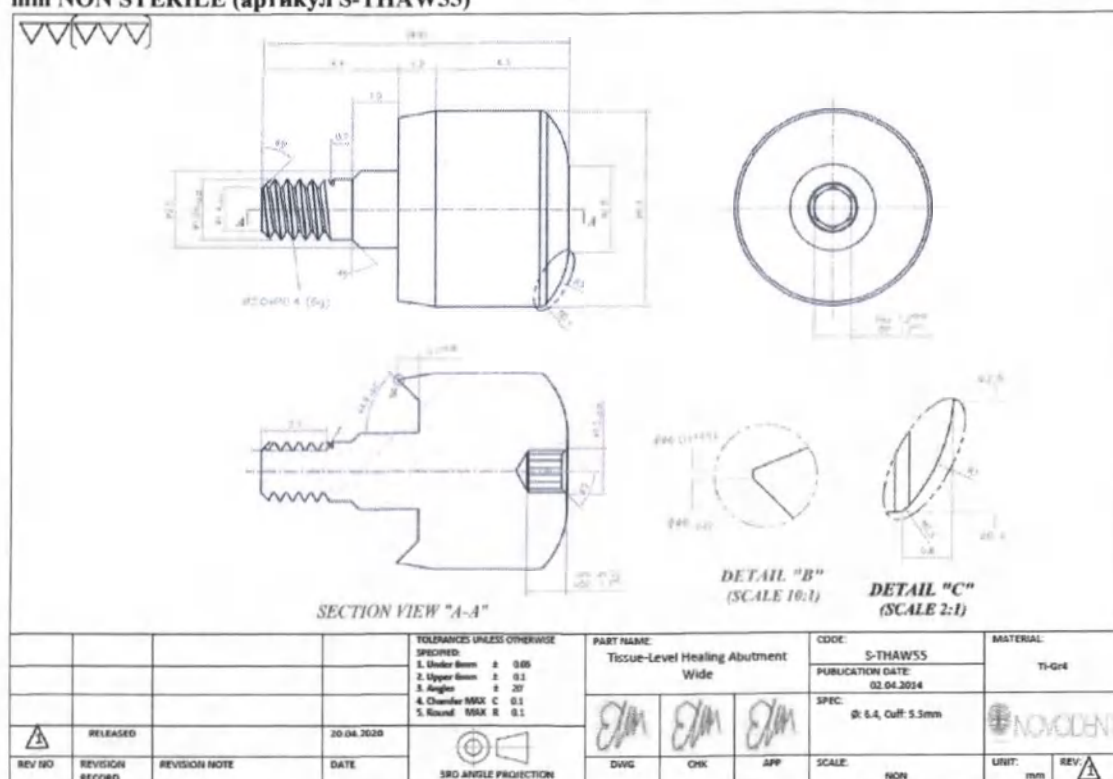Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-THAW55)



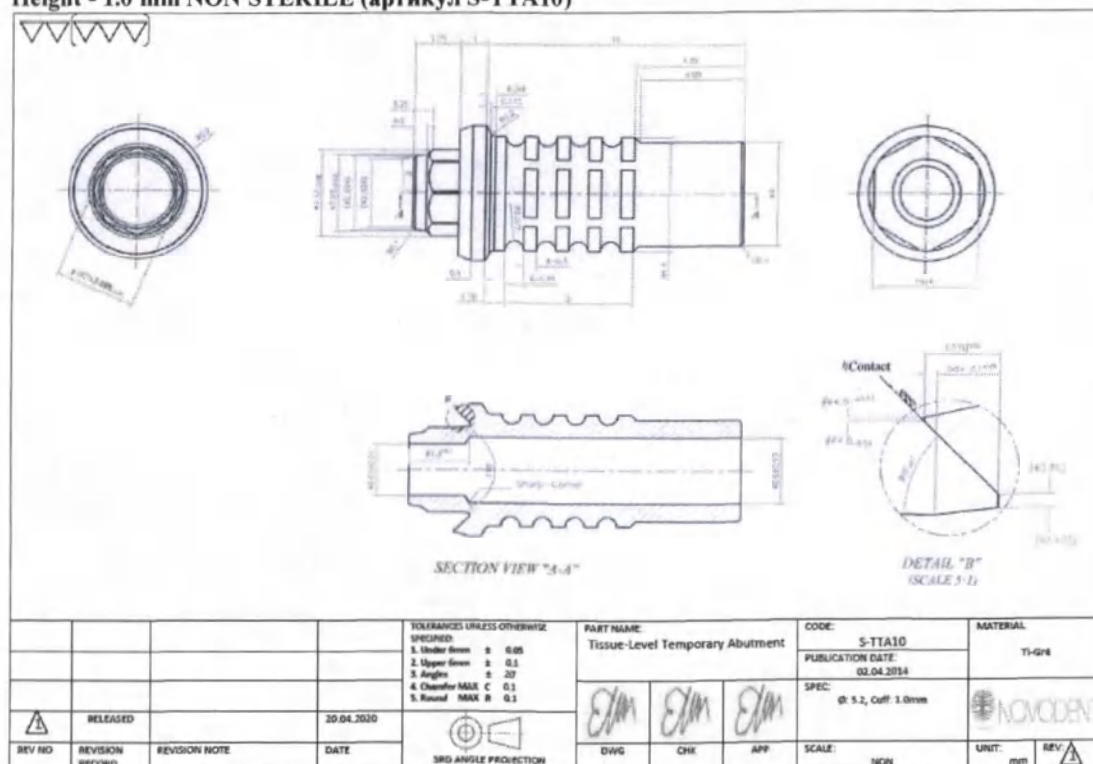Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TTA10)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

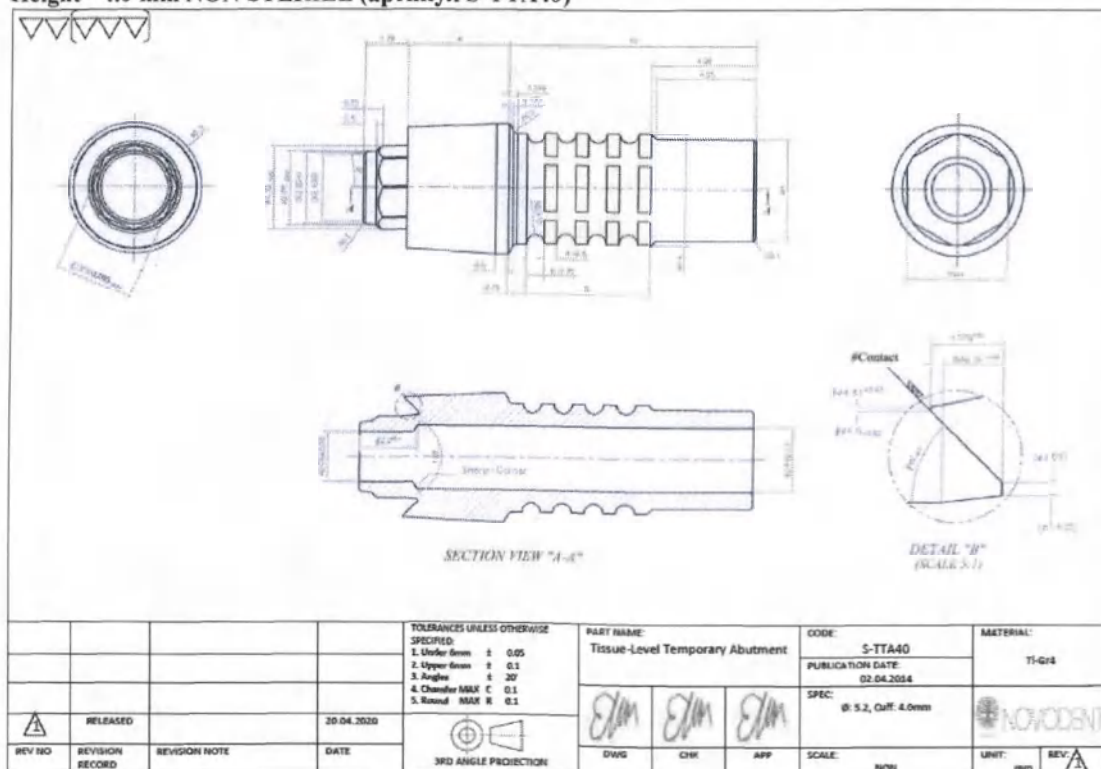Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TTA40)




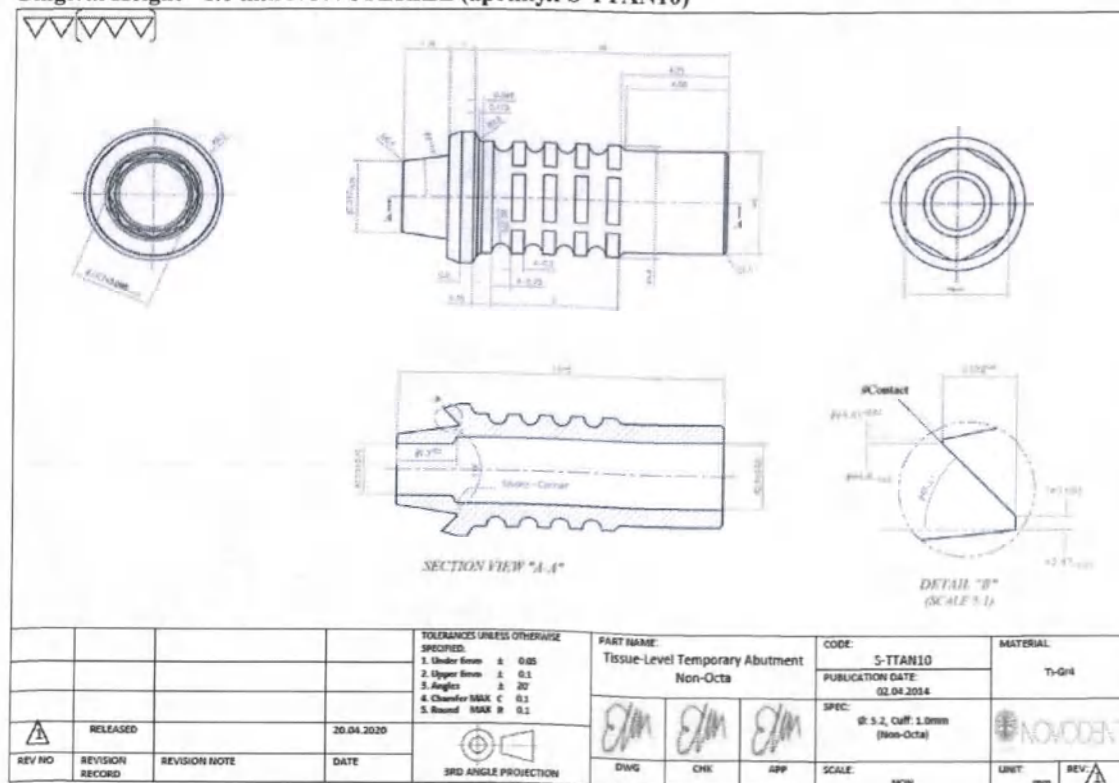Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TTAN10)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

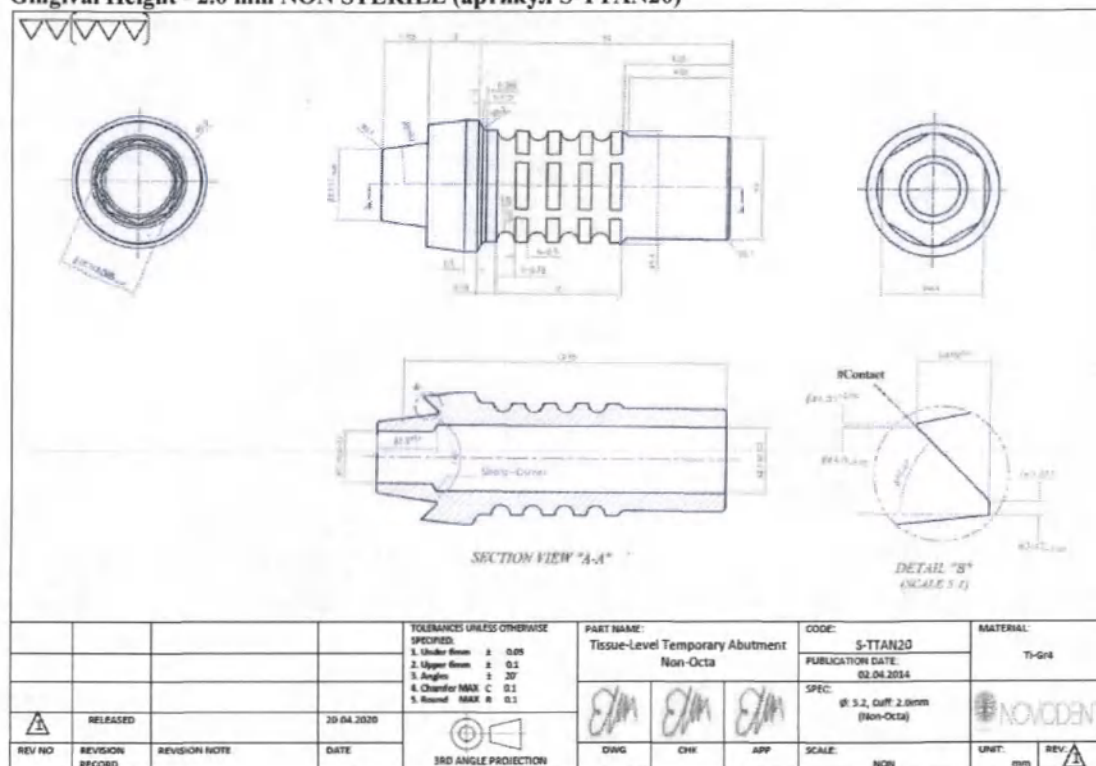Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TTAN20)



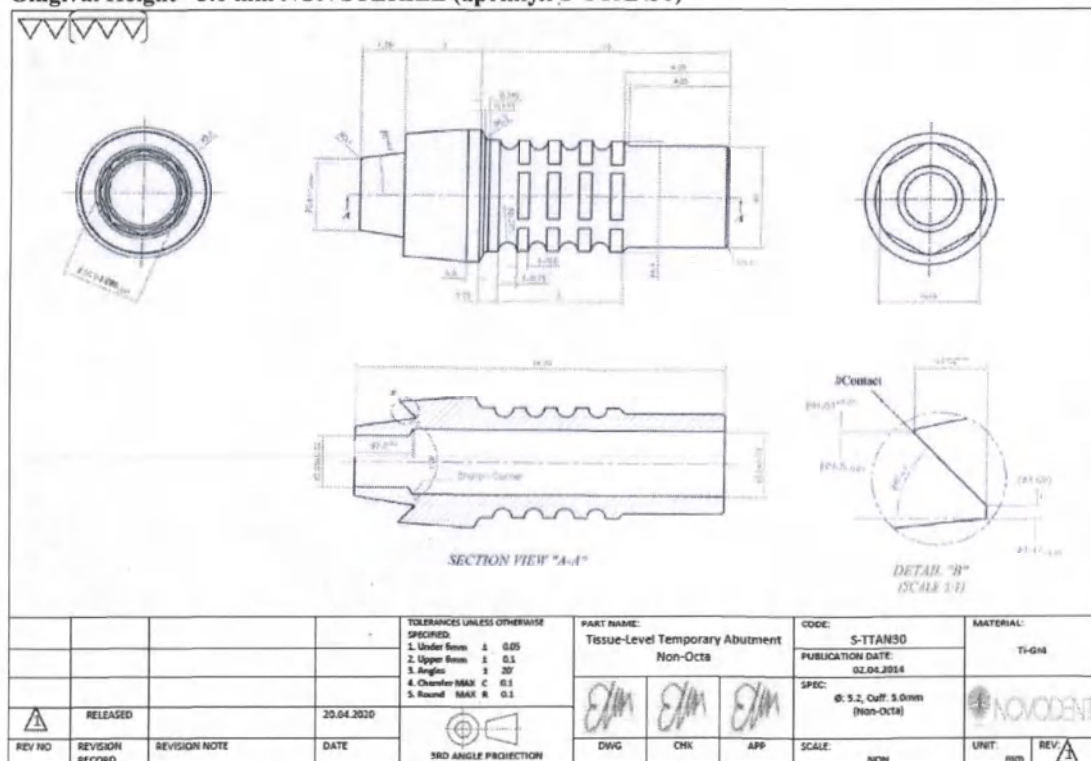Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TTAN30)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

SECTION VIEW "A-A"


DETAIL "B" (SCALE 5:1)

				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1. Upper limits ± 0.05 2. Upper limits ± 0.1 3. Angles ± 20° 4. Chamfer MAX C 0.1 5. Round MAX R 0.1	PART NAME: Tissue-Level Temporary Abutment Non-Octa	CODE: S-TTAN40	MATERIAL: Ti-6Al4
						PUBLICATION DATE: 02.04.2024	
						SPEC: Ø 5.2, CxR: 4.0mm (Non-Octa)	
REV NO	RELEASED	20.04.2020					
REV NO	REVISION	REVISION NOTE	DATE				


[illegible]

Страница 93 из 344

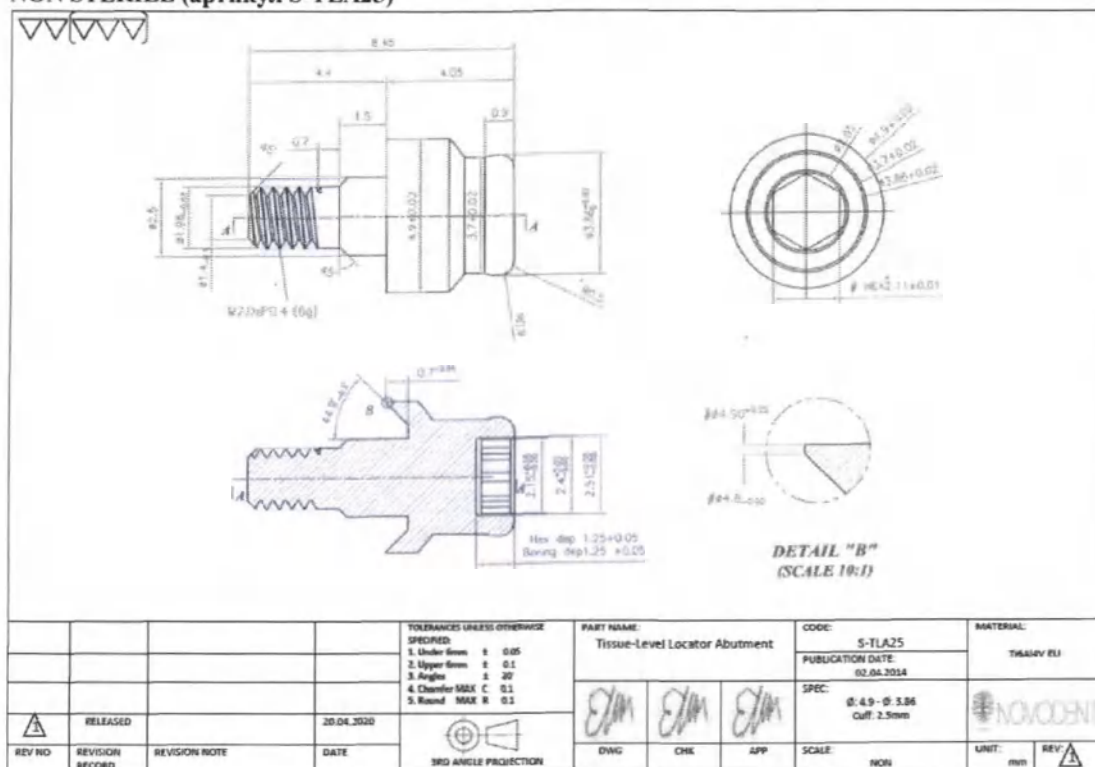**Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 2.5 mm
NON STERILE (артикул S-TLA25)**



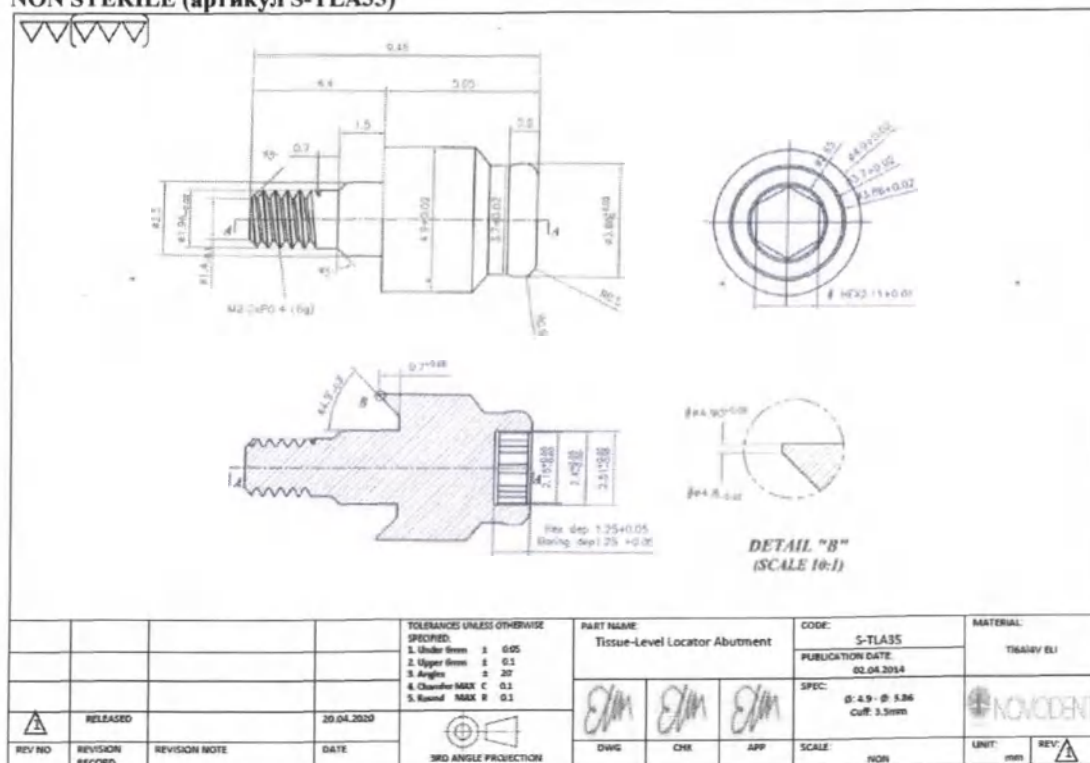**Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 3.5 mm
NON STERILE (артикул S-TLA35)**



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

A diagram showing a sequence of five downward-pointing triangles. The first two are outside a bracket, and the next three are inside a bracket.




implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

REV NO	REVISION RECORD	REVISION NOTE	DATE	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1. Under Dimm ± 0.05 2. Upper Dimm ± 0.1 3. Angles ± 30° 4. Chamfer 35X ± 0.1 5. Round M0.2 R 0.1	PART NAME: Tissue-Level Locator Abutment	CODE: S-TLA65	MATERIAL: TISAGIV ELI
1	RELEASED		20.04.2020				
						SPEC: Ø: 4.9 - Ø: 5.95 Cuff: 6.5mm	
						SCALE: 10:1	UNIT: mm


Страница 96 из 344

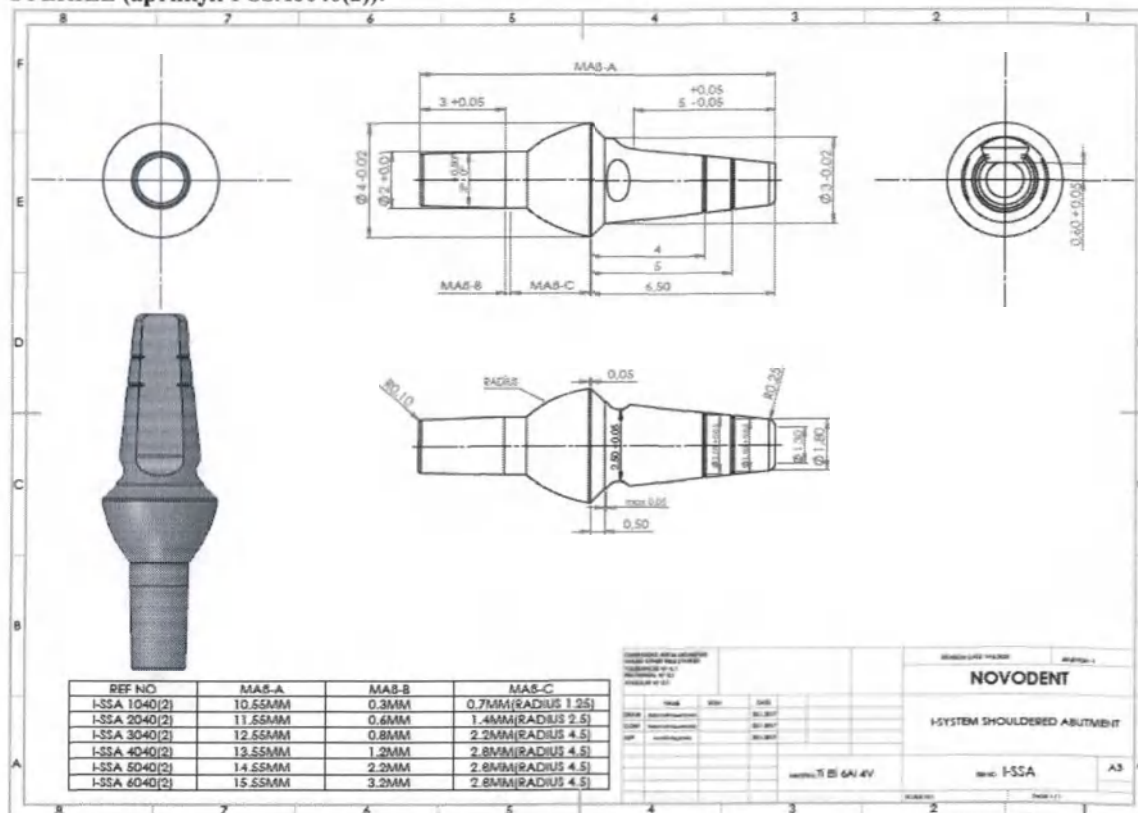Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1040(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2040(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3040(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4040(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5040(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6040(2)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

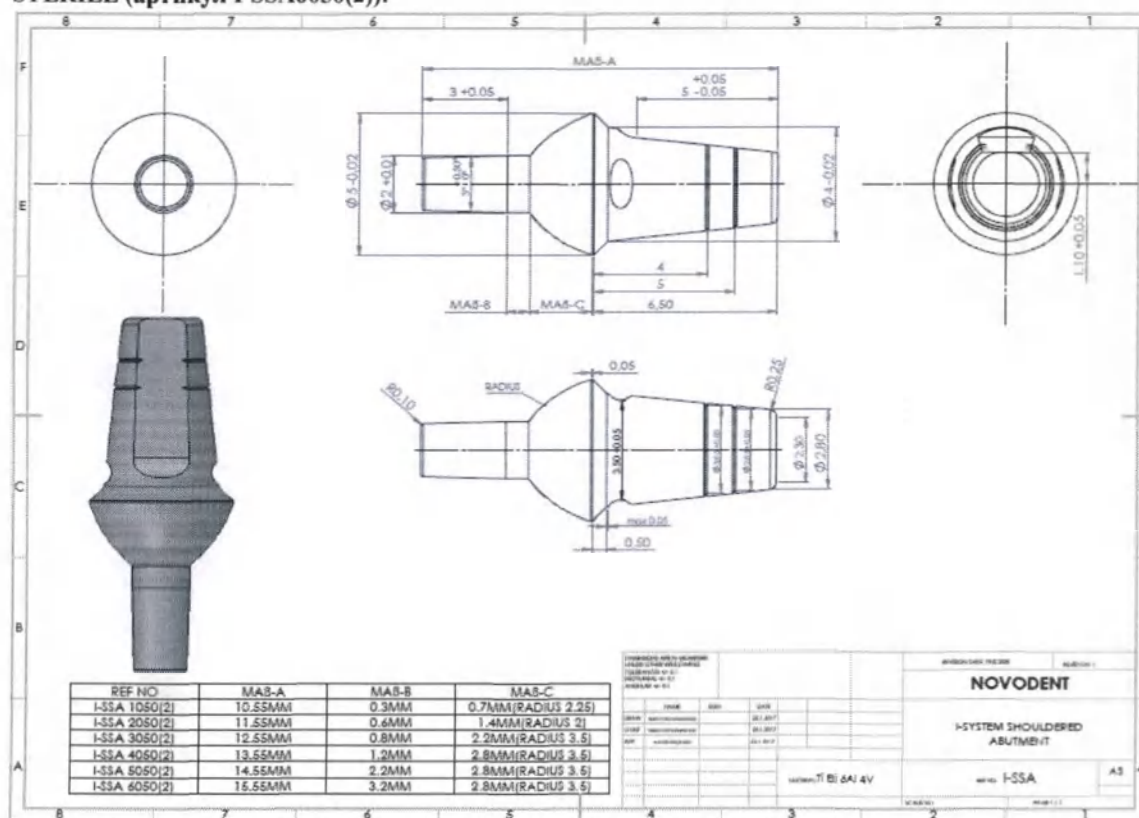Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1050(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2050(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3050(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4050(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5050(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6050(2)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA1040(2.5)),

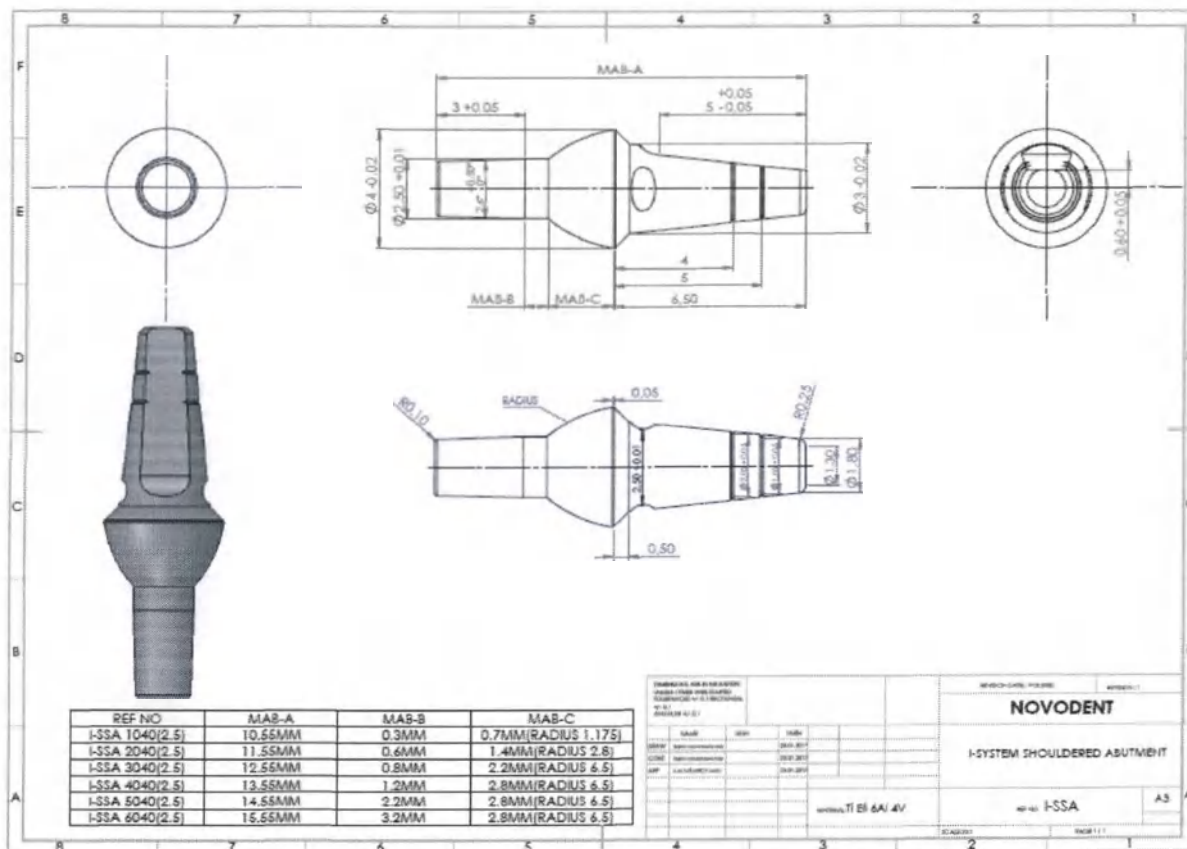
Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA2040(2.5)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA3040(2.5)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA4040(2.5)),


Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA5040(2.5)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA6040(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

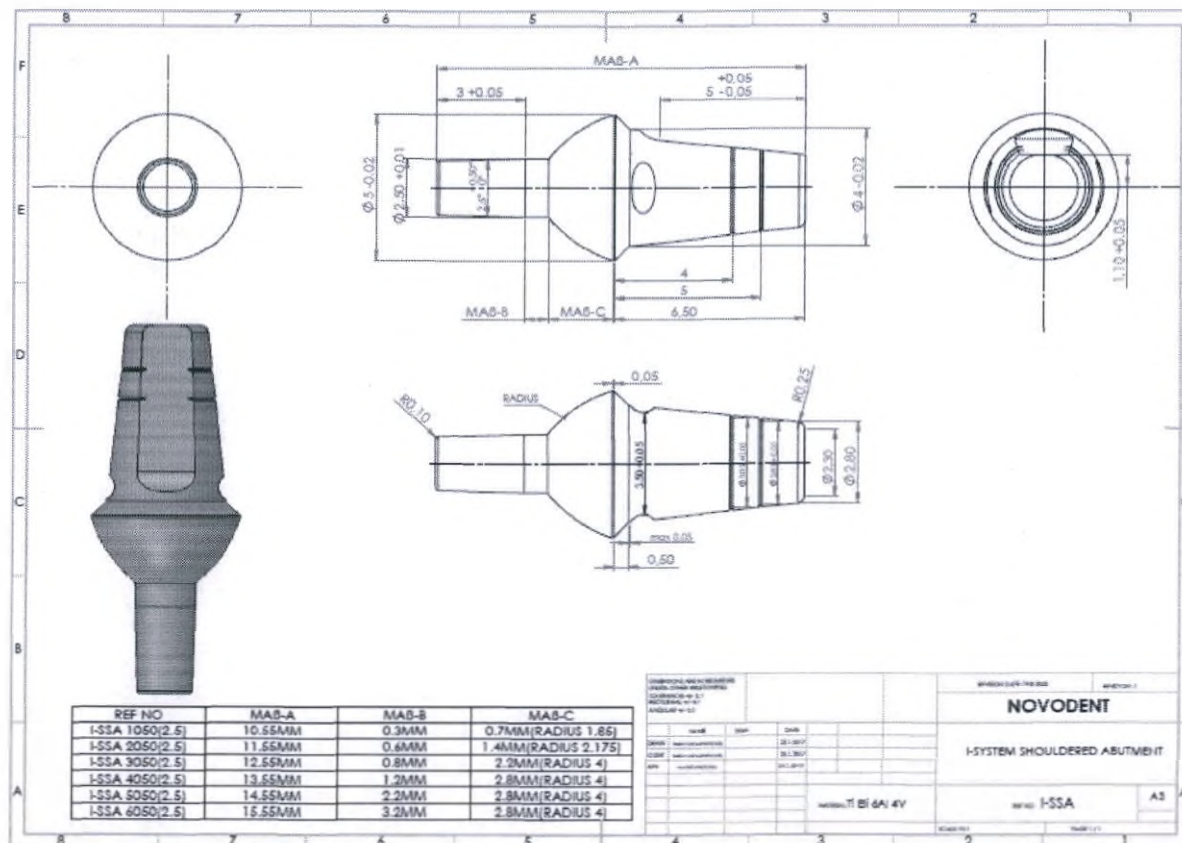Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA1050(2.5)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA2050(2.5)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA3050(2.5)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA4050(2.5)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA5050(2.5)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA6050(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

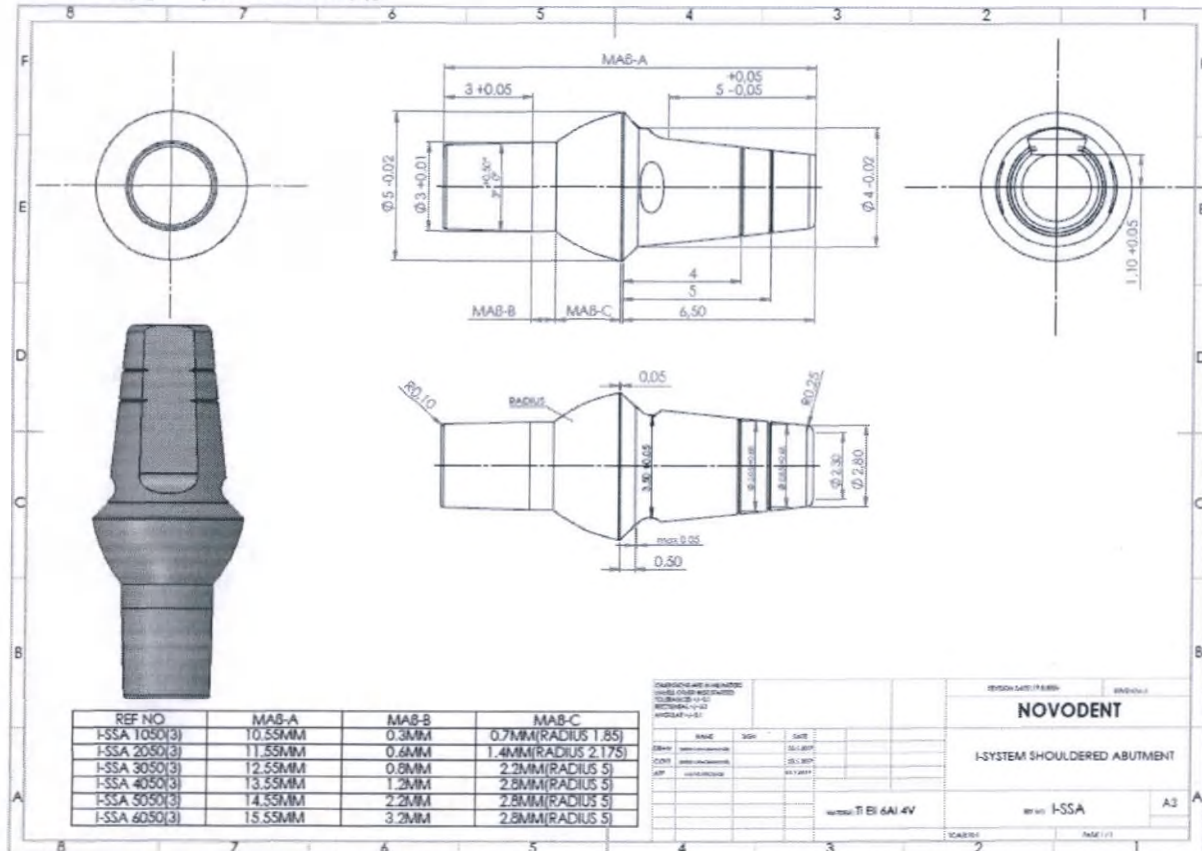Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1050(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2050(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3050(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4050(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5050(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6050(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артрыка I-SSA1065(3)),

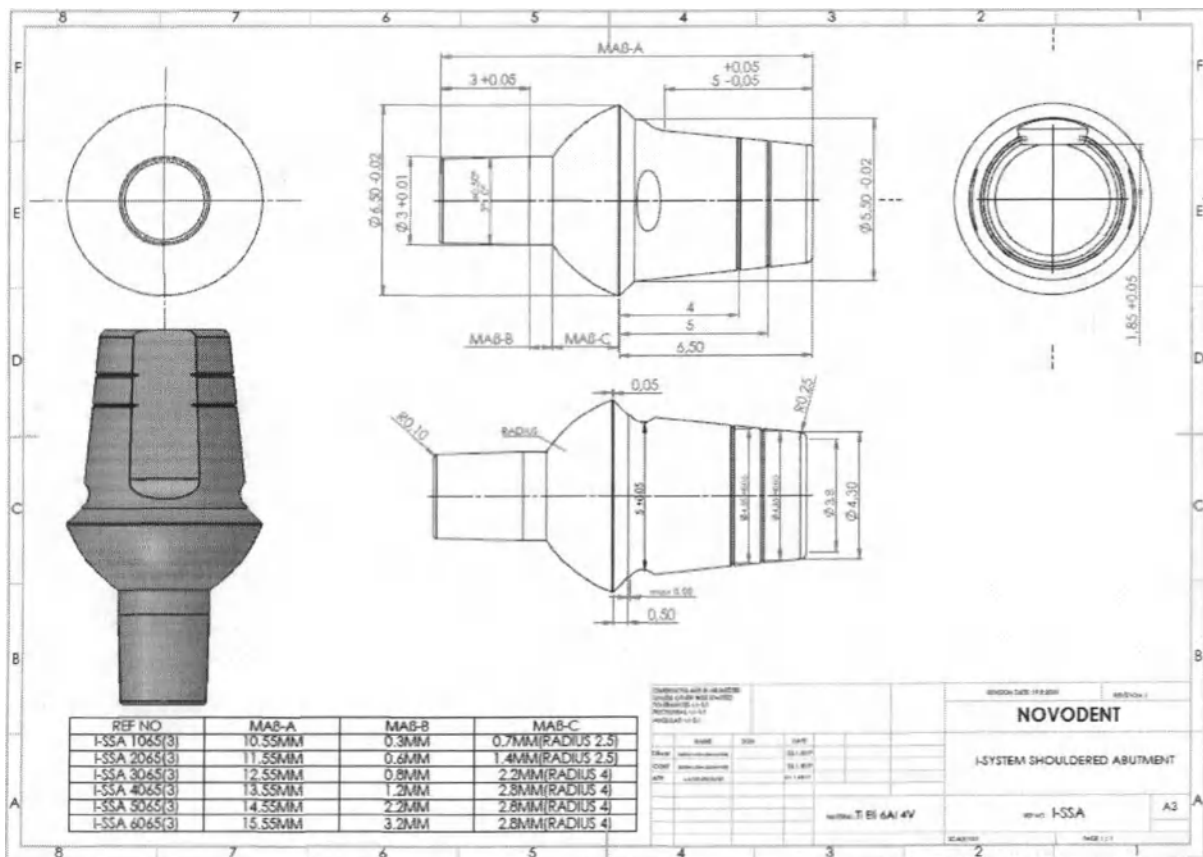
Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артрыка I-SSA2065(3)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артрыка I-SSA3065(3)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артрыка I-SSA4065(3)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артрыка I-SSA5065(3)),

Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артрыка I-SSA6065(3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 102 из 344

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2040- 15(2)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4040- 15(2)),

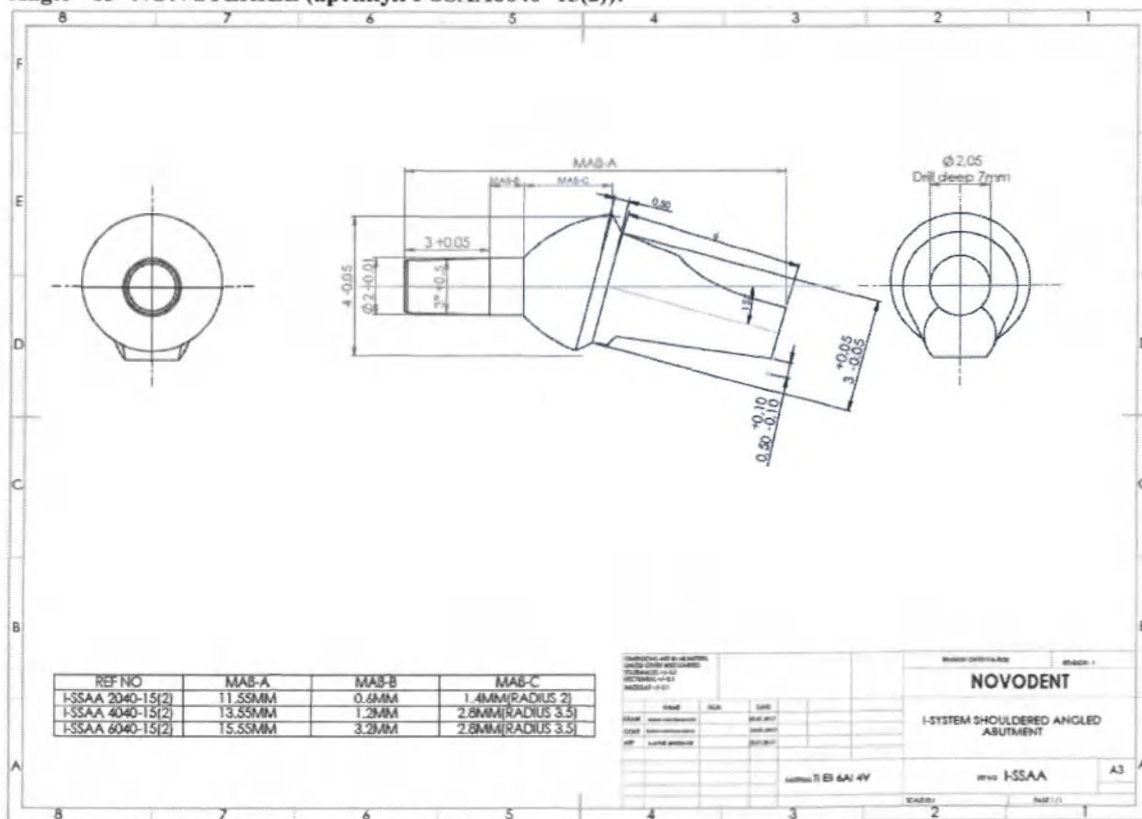Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6040- 15(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 103 из 344

[illegible]

Страница 104 из 344

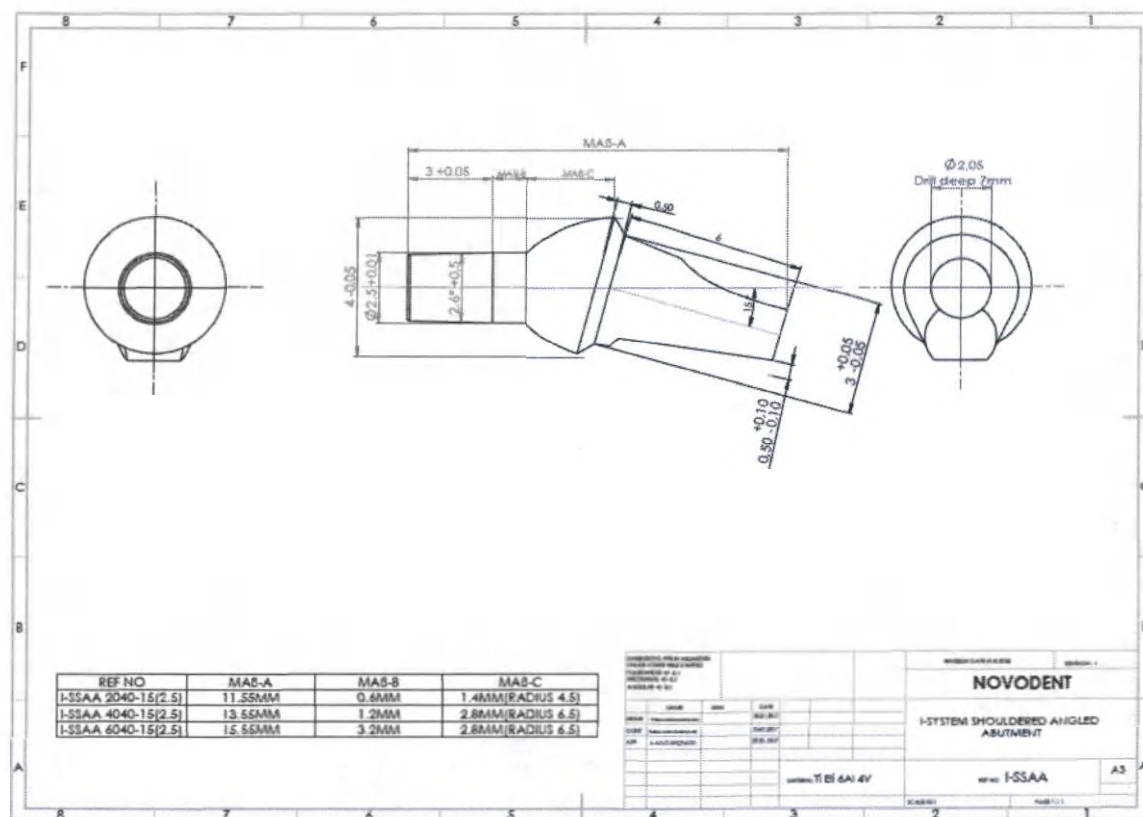Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6040-15(2.5)):




Страница 105 из 344

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2050- 15(2.5)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4050- 15(2.5)),

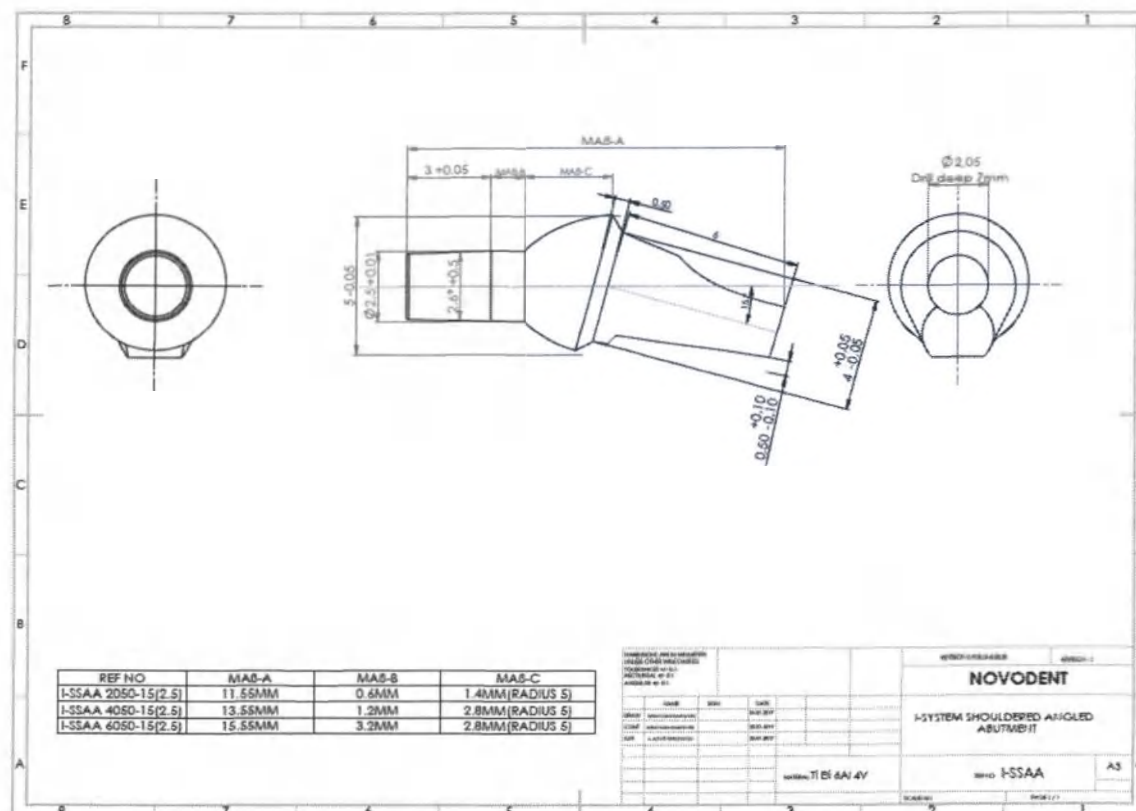
Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6050- 15(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 106 из 344

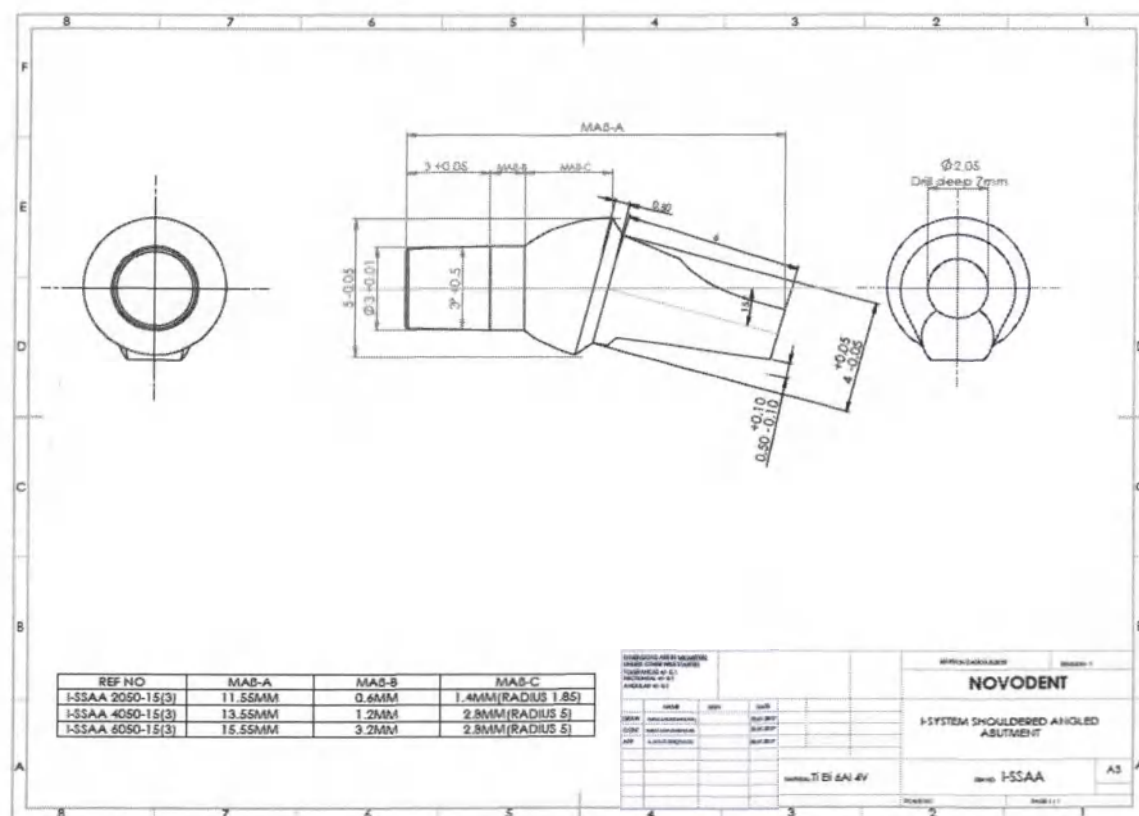Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2050- 15(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4050- 15(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6050- 15(3)):




Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2065- 15(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4065- 15(3)),
 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6065- 15(3)):

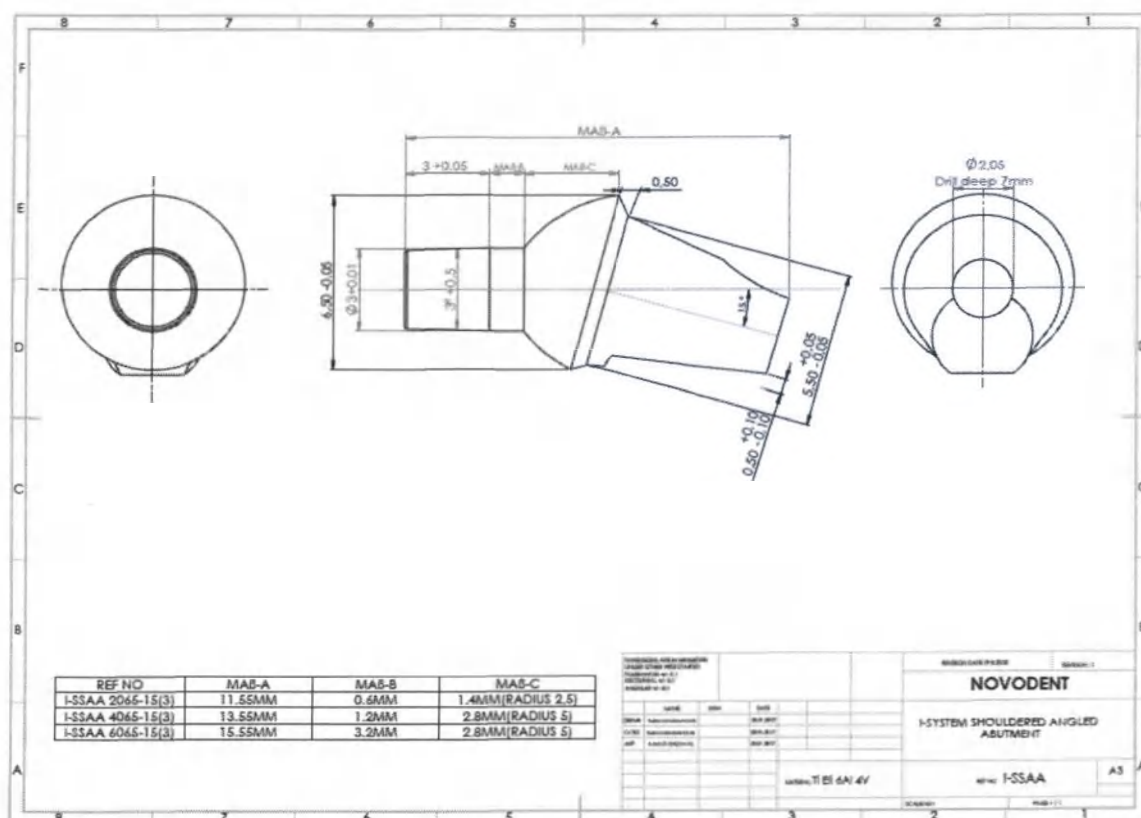

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 108 из 344

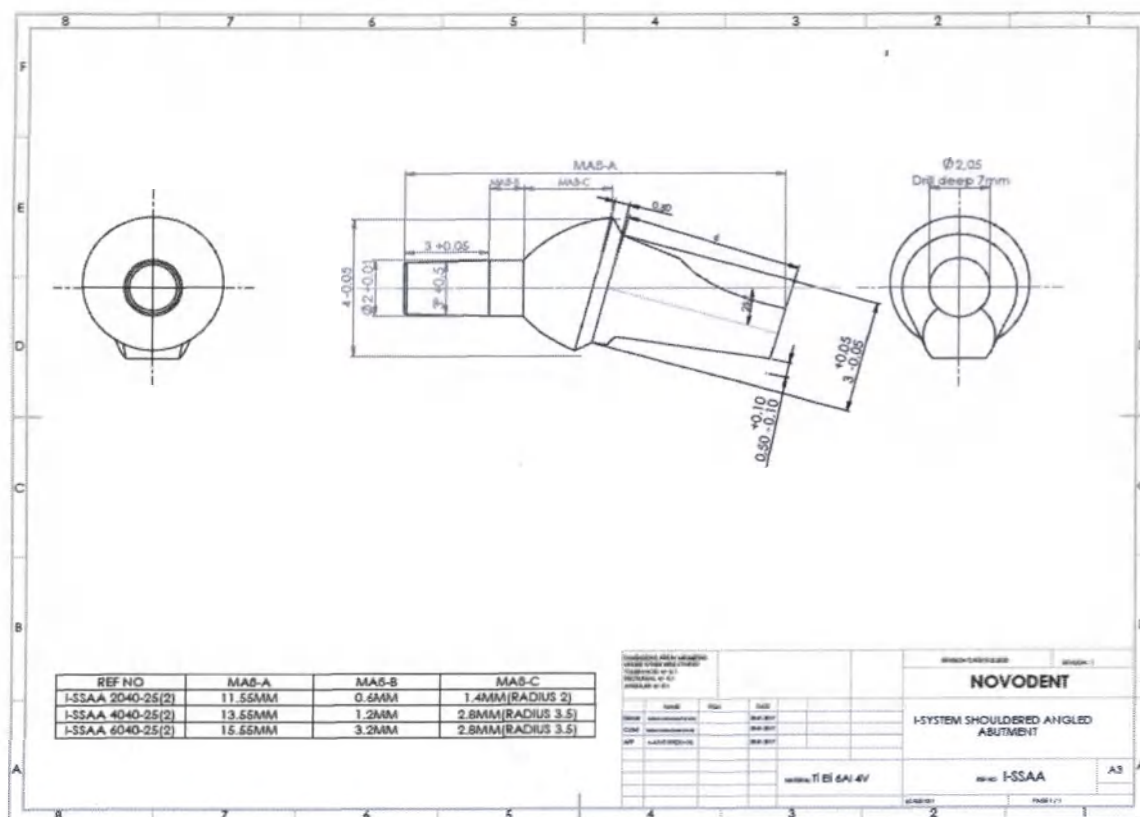Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2040- 25(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4040- 25(2)),
 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6040- 25(2))




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 109 из 344

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2050- 25(2)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4050- 25(2))

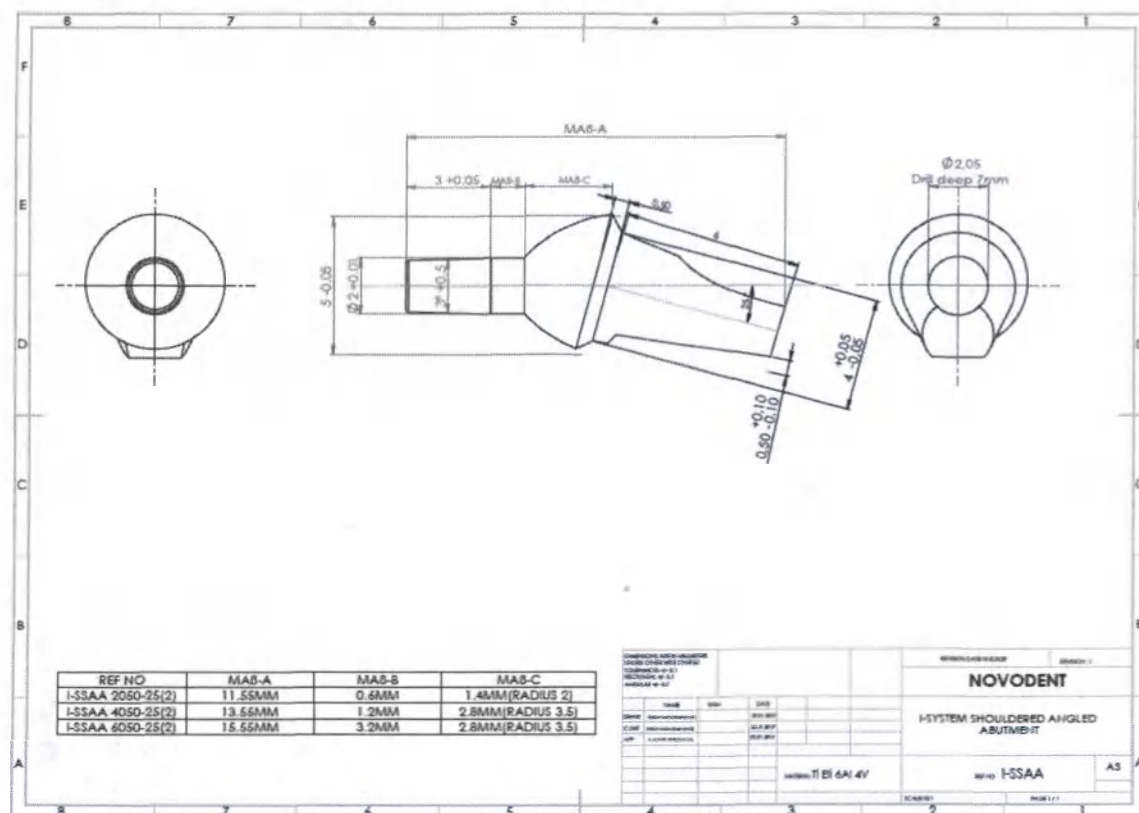Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6050- 25(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 110 из 344

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2040- 25(2.5)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4040- 25(2.5)),

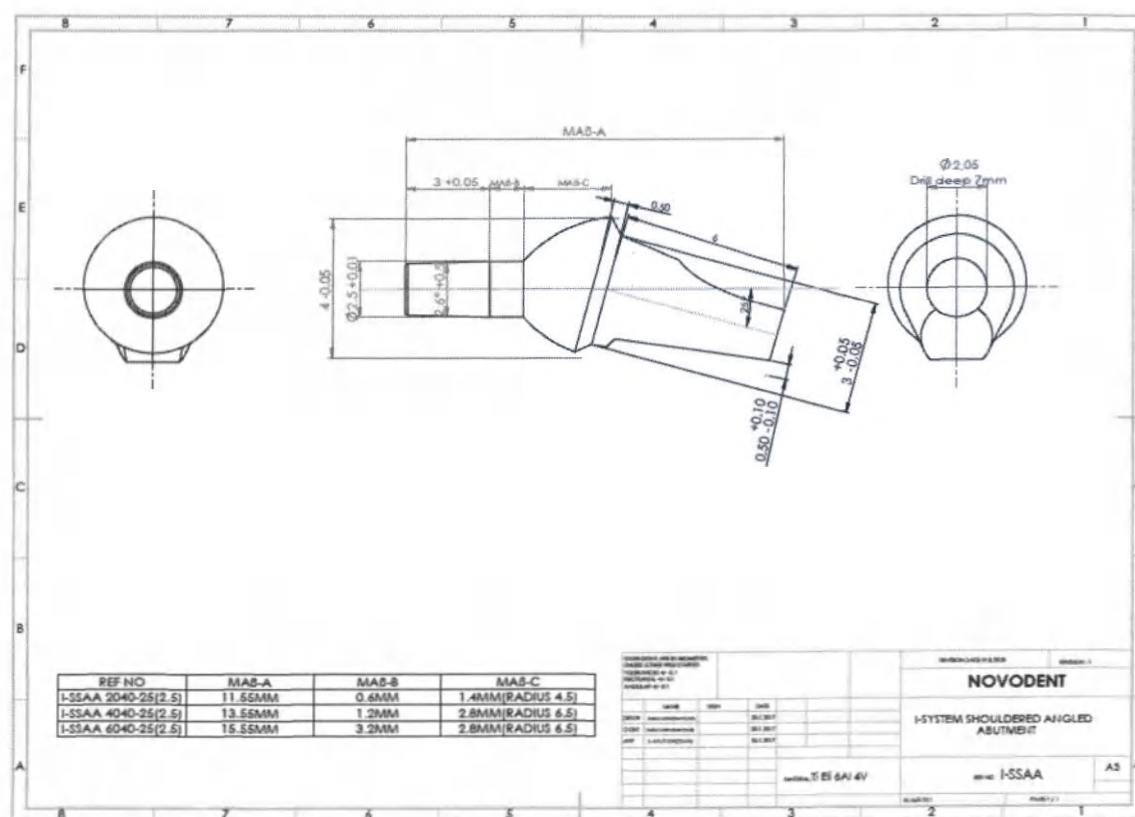Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6040- 25(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 111 из 344

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2050- 25(2.5)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4050- 25(2.5)),

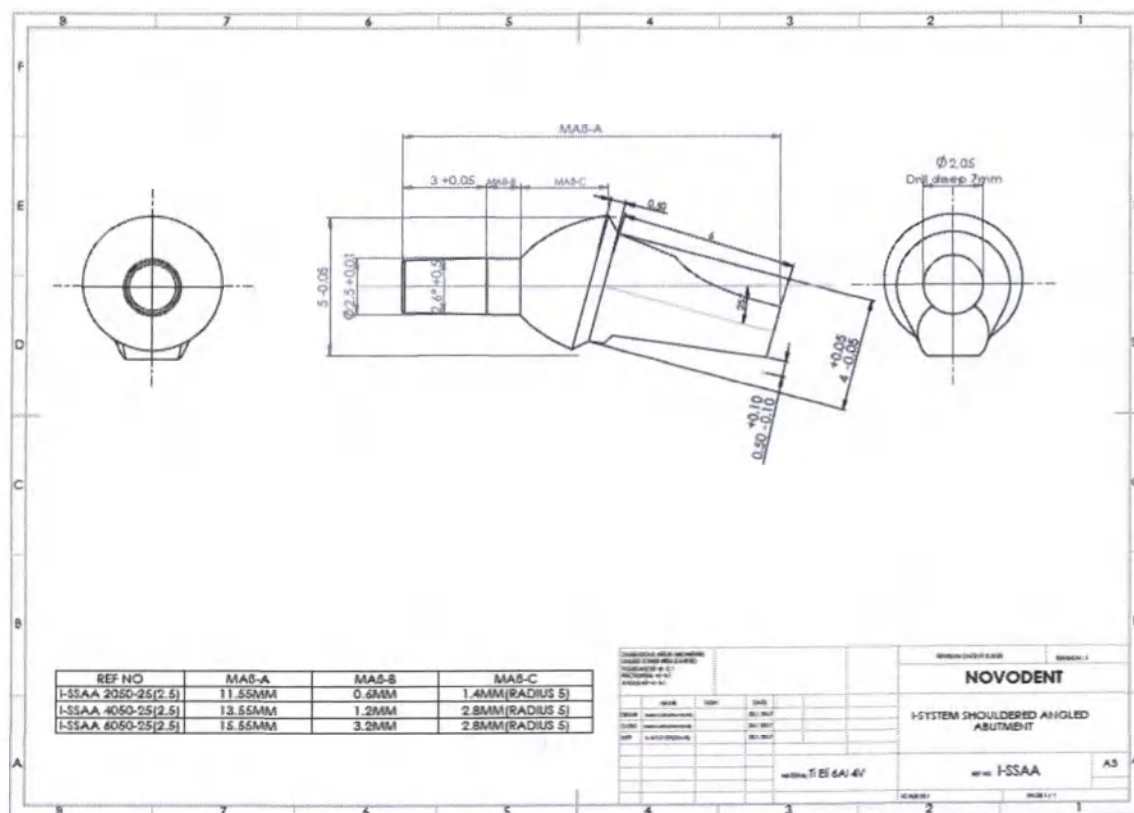Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6050- 25(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 112 из 344

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2050- 25(3)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4050- 25(3))

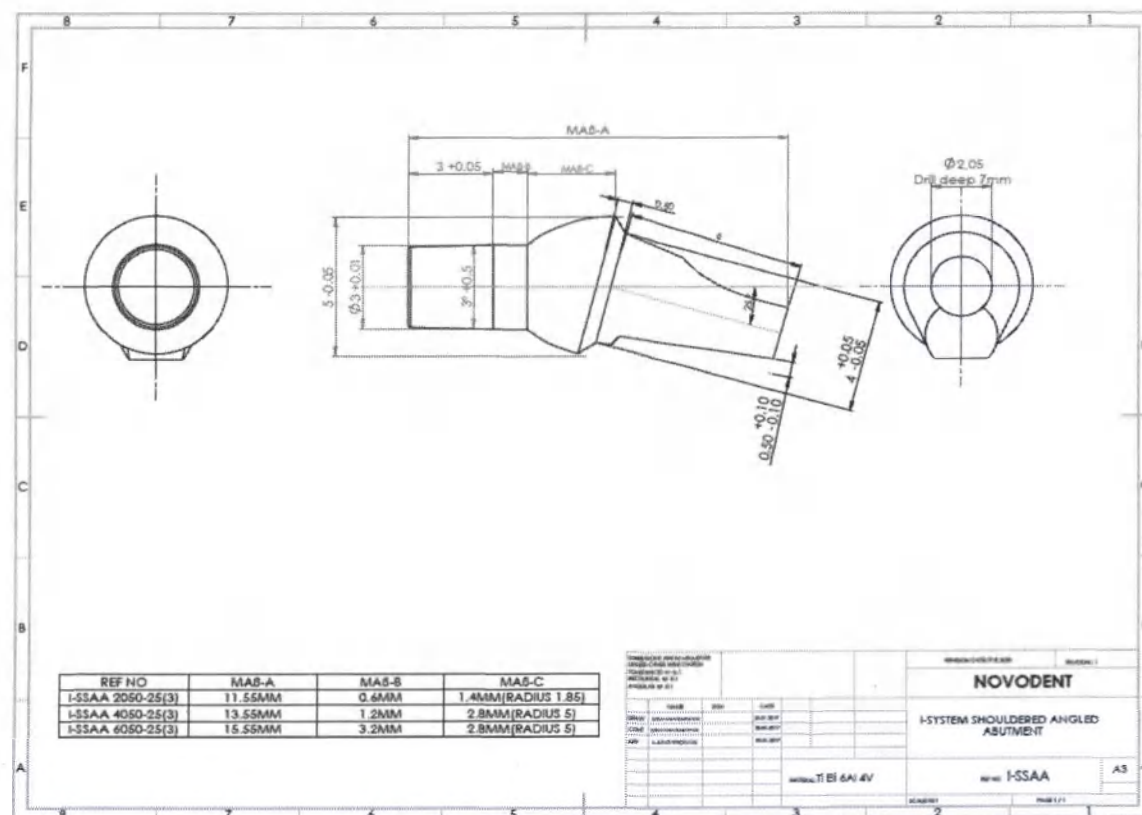Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6050- 25(3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2065- 25(3)),

Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4065- 25(3)),

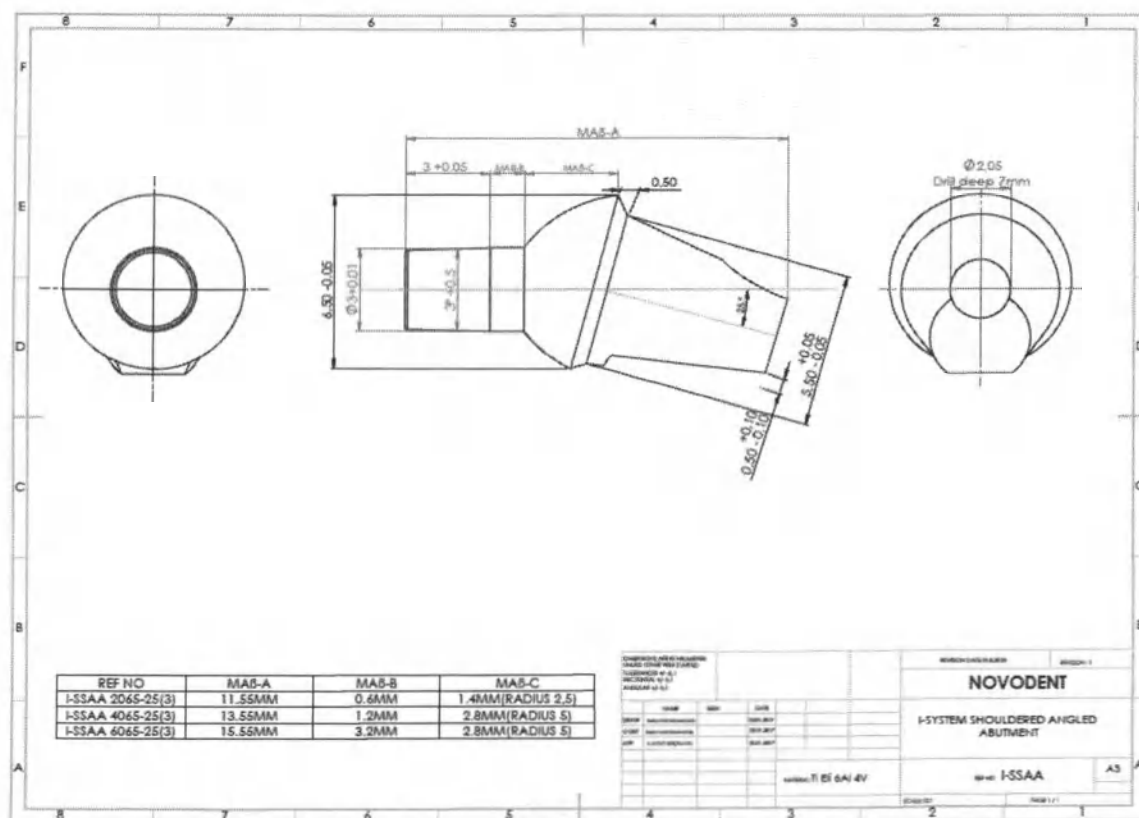Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6065- 25(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 114 из 344

**Abutment i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA6040(2)):**

REF NO	MAS-A	MAS-B	MAS-C
I-SNSA 1040(2)	11.55MM	0.3MM	0.7MM(RADIUS 1.25)
I-SNSA 2040(2)	12.55MM	0.6MM	1.4MM(RADIUS 3.5)
I-SNSA 3040(2)	13.55MM	0.8MM	2.2MM(RADIUS 5)
I-SNSA 4040(2)	14.55MM	1.2MM	2.8MM(RADIUS 5)
I-SNSA 5040(2)	15.55MM	2.2MM	2.8MM(RADIUS 5)
I-SNSA 6040(2)	16.55MM	3.2MM	2.8MM(RADIUS 5)

**Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA6050(2)):**

REF NO	MAS-A	MAS-B	MAS-C
LSNSA 1050(2)	11.55MM	0.3MM	0.7MM(RADIUS 1.5)
LSNSA 2050(2)	12.55MM	0.6MM	1.4MM(RADIUS 2)
LSNSA 3050(2)	13.55MM	0.8MM	2.2MM(RADIUS 3.5)
LSNSA 4050(2)	14.55MM	1.2MM	2.8MM(RADIUS 3.5)
LSNSA 5050(2)	15.55MM	2.2MM	2.8MM(RADIUS 3.5)
LSNSA 6050(2)	16.55MM	3.2MM	2.8MM(RADIUS 3.5)

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA1040(2.5)),

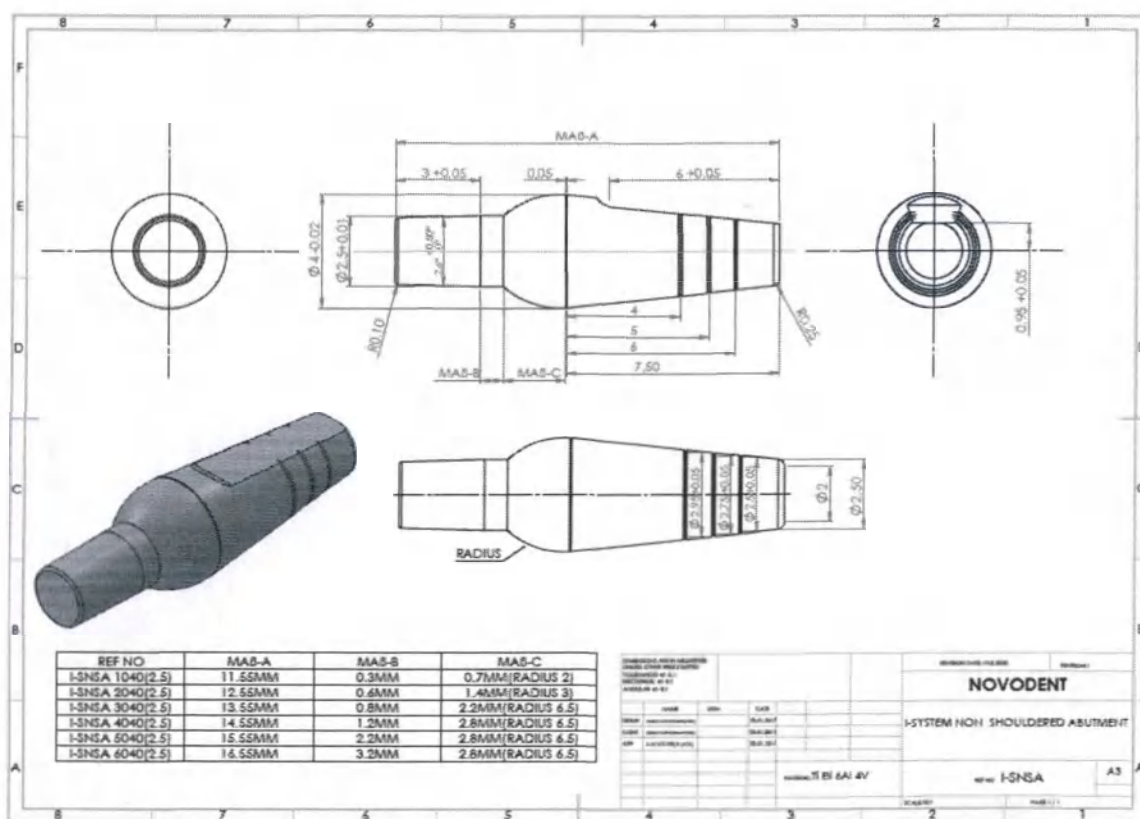
Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA2040(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA3040(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA4040(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA5040(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA6040(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1050(2.5)),

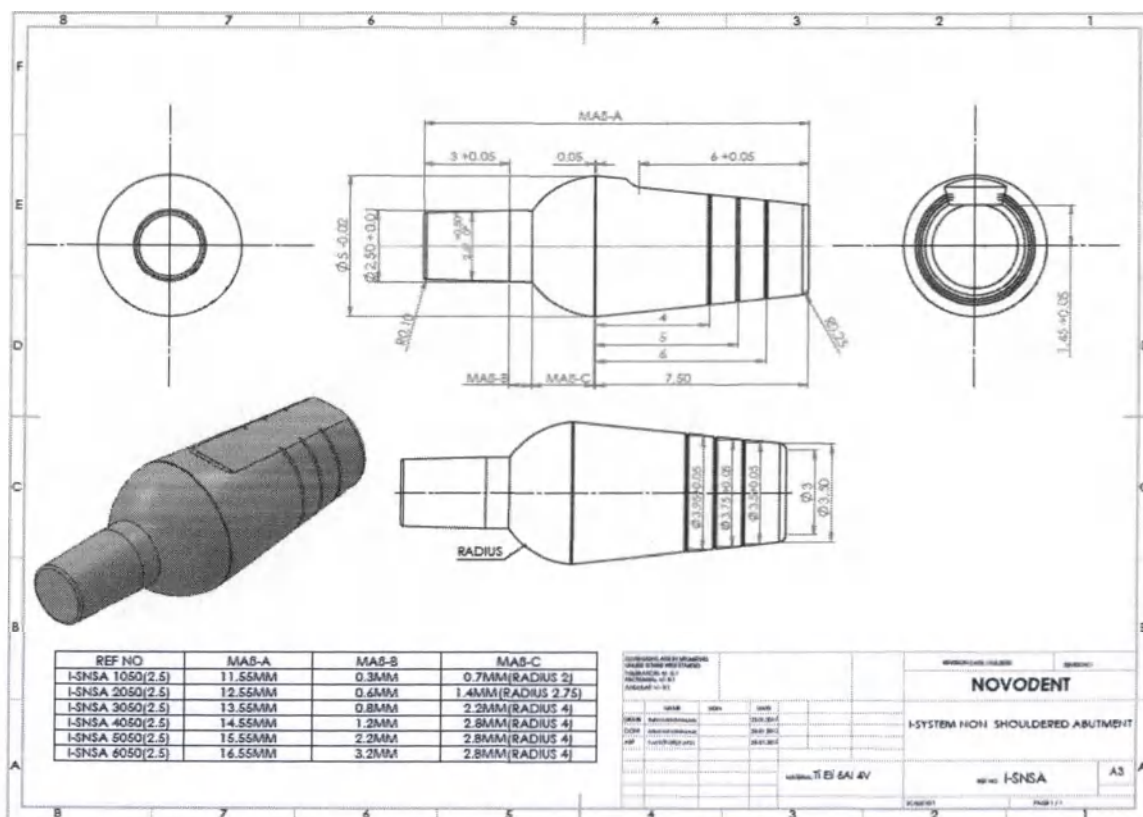
Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2050(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3050(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4050(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5050(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6050(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA1050(3)),

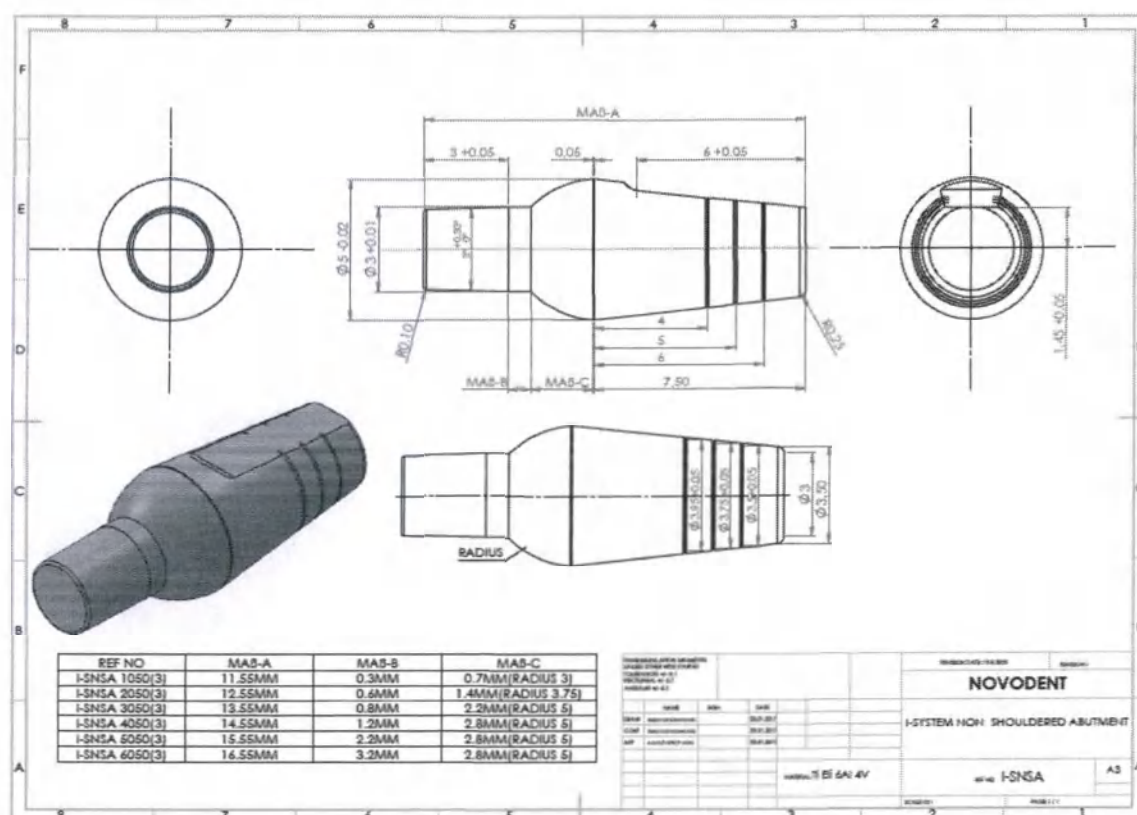
Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA2050(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA3050(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA4050(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA5050(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA6050(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации:
implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 119 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA1065(3)),

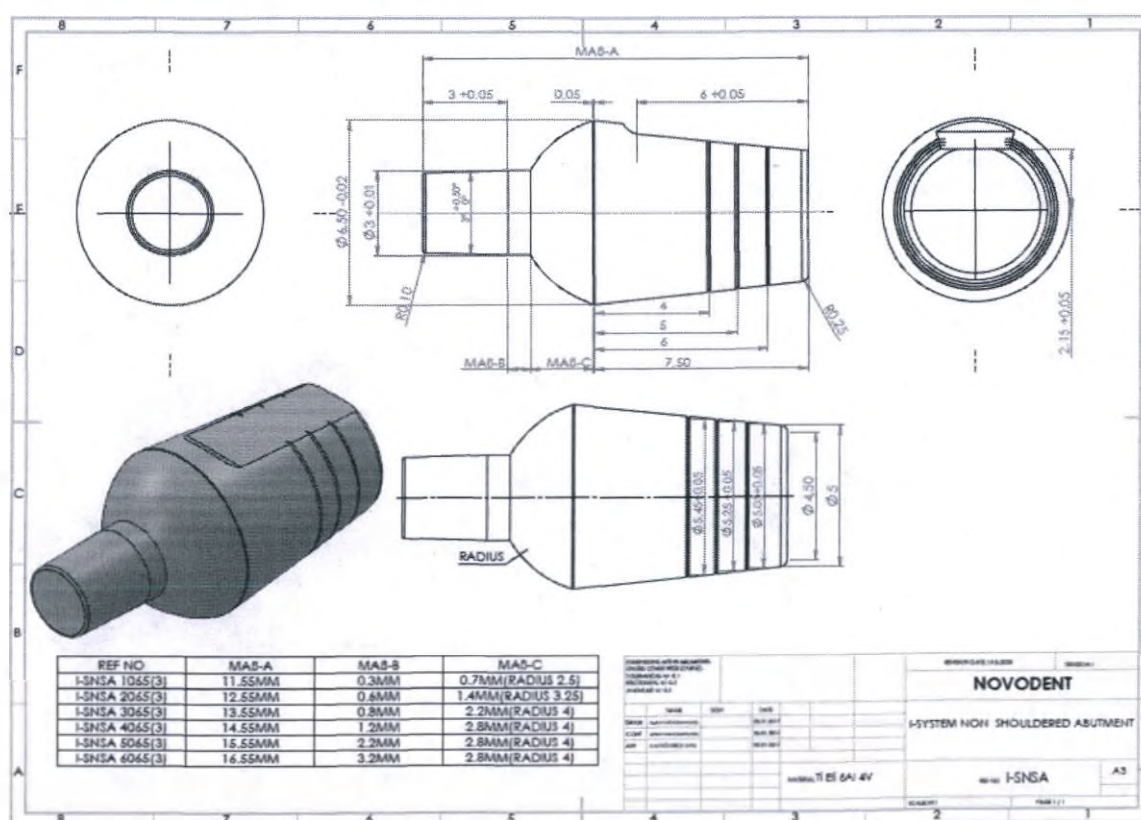
Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA2065(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA3065(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA4065(3)),


Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA5065(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm
NON STERILE (артикул I-SNSA6065(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации»
implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

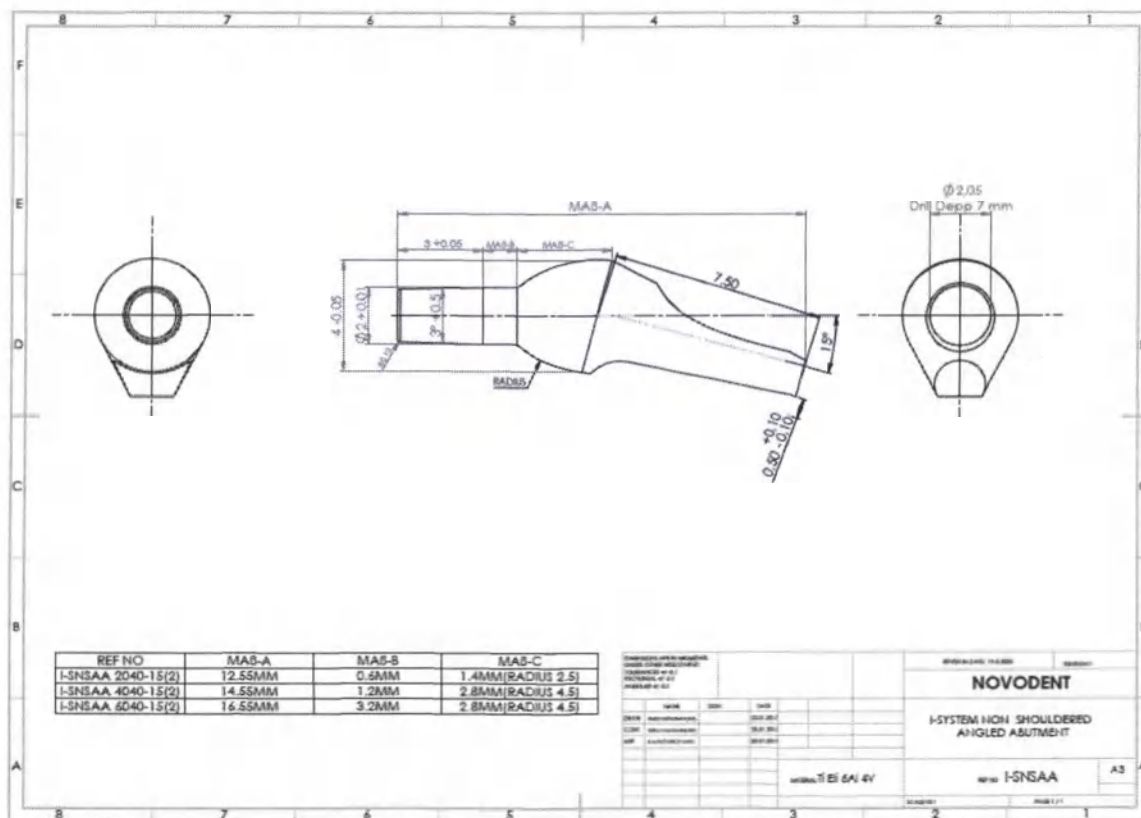Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040- 15(2)),
 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040- 15(2)),
 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040- 15(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050- 15(2)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050- 15(2)),

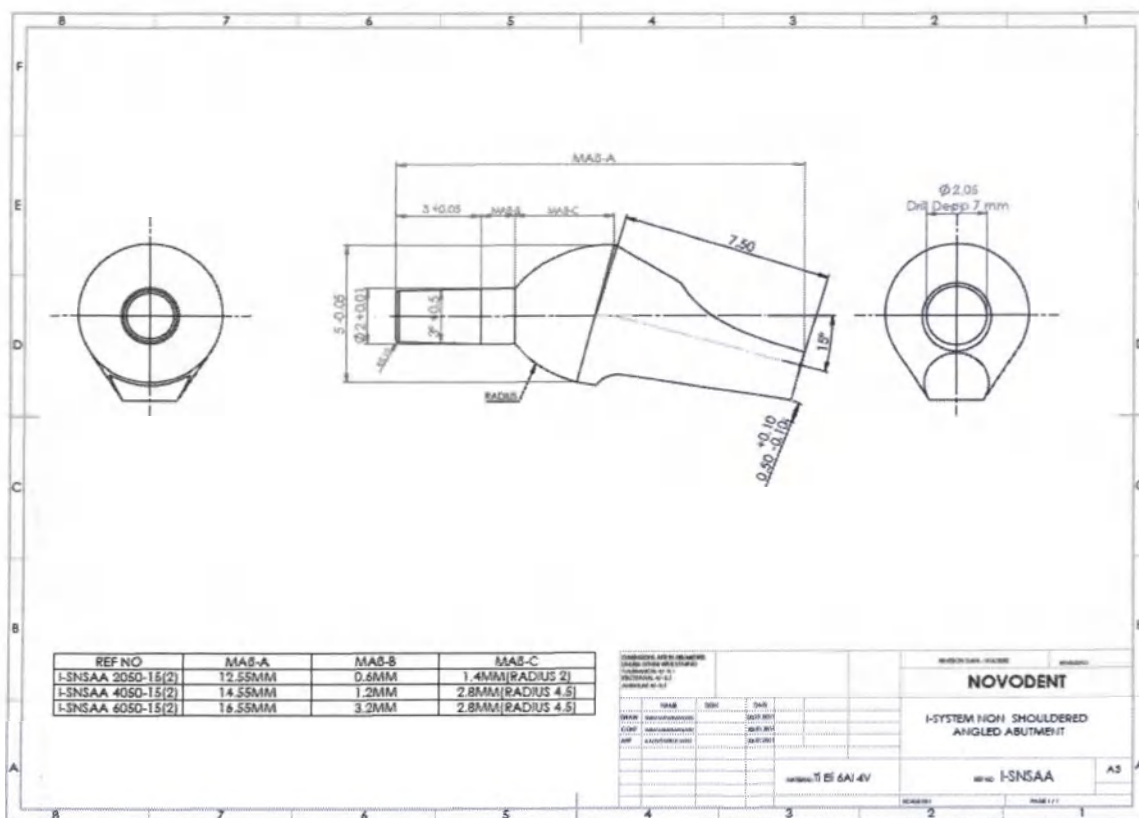Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050- 15(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 122 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040- 15(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040- 15(2.5)),

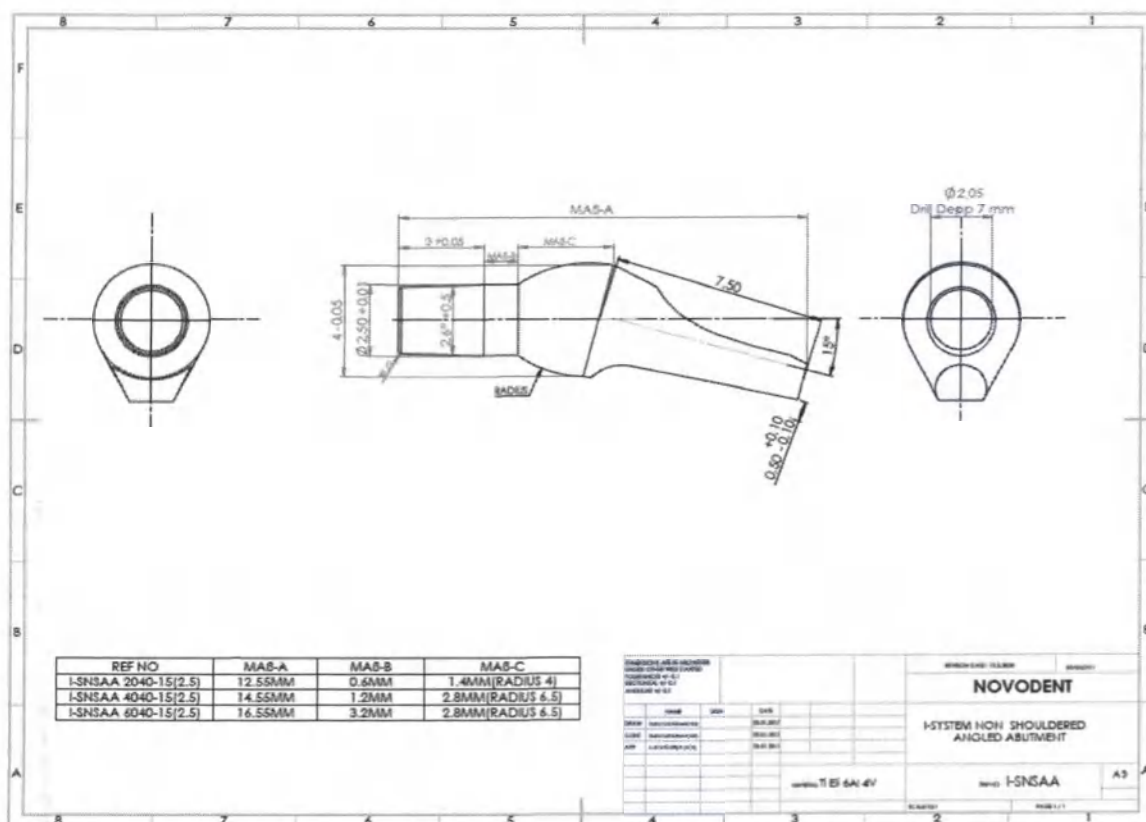
Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040- 15(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 123 из 344

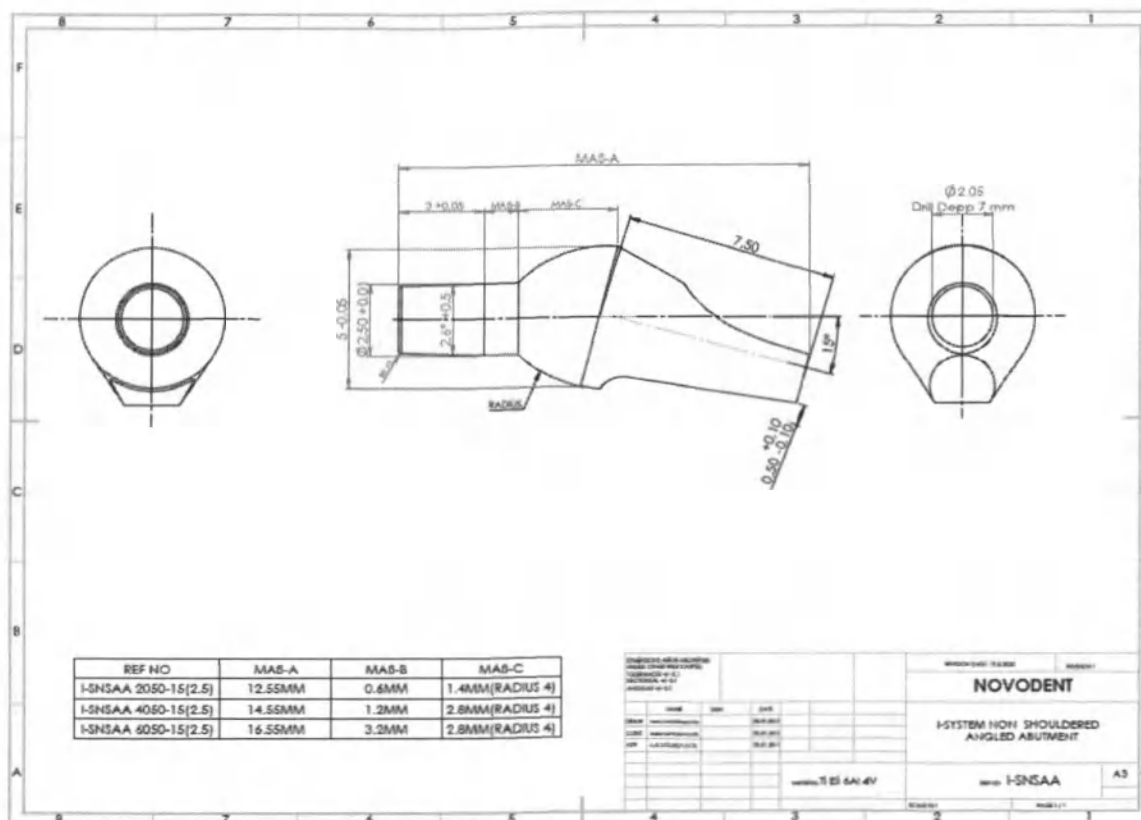Abutment i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050- 15(2.5)):




Страница 124 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050- 15(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050- 15(3)),

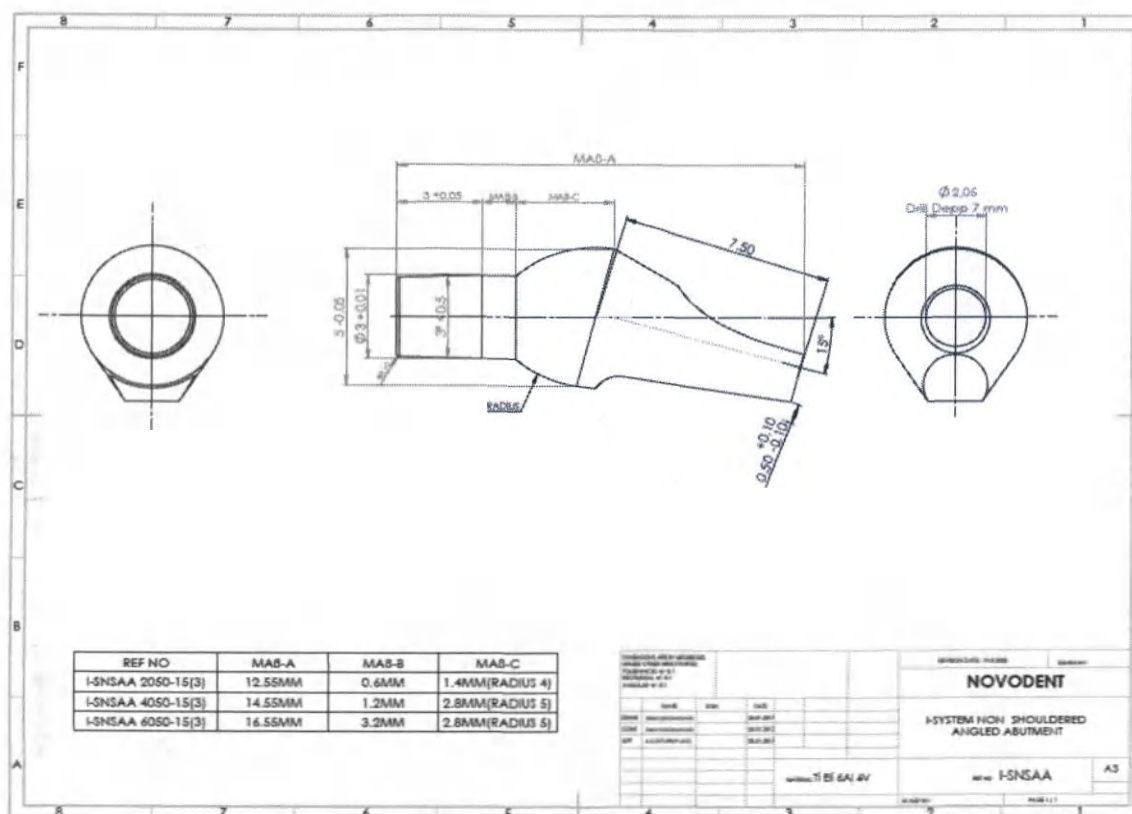Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050- 15(3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 125 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2065- 15(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4065- 15(3)),

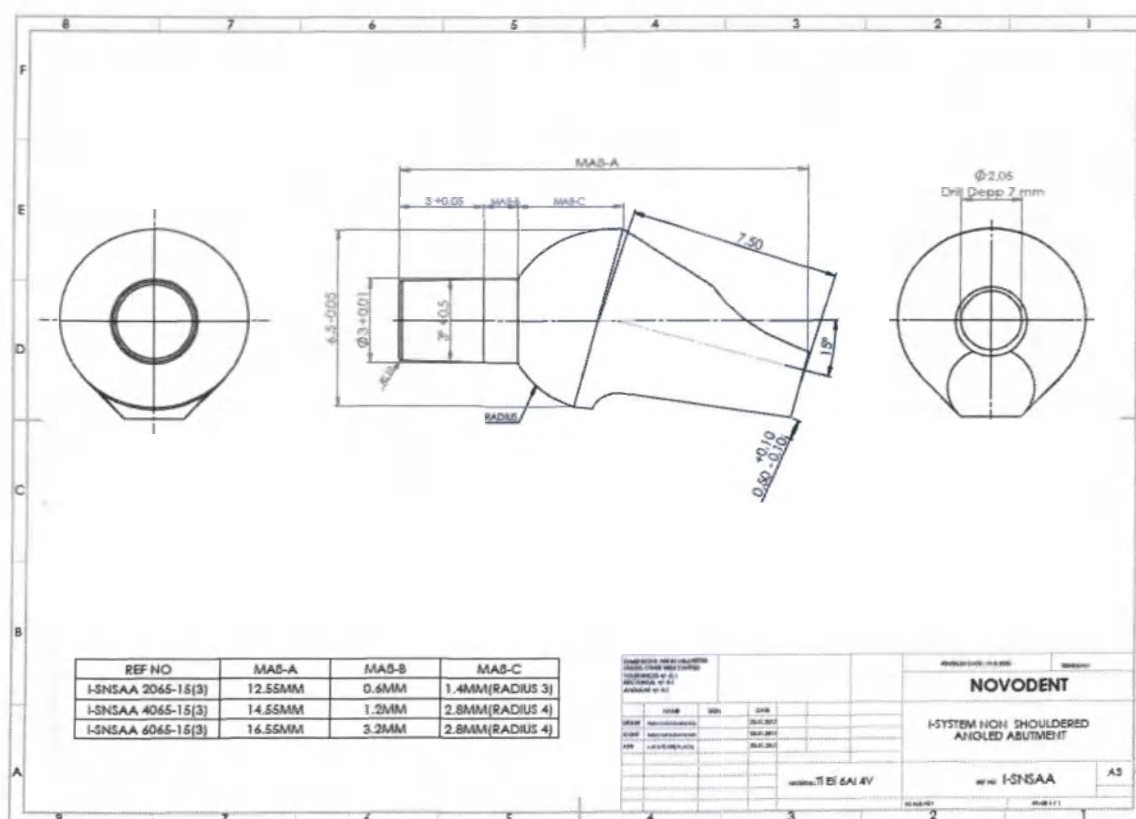Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6065- 15(3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 126 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040- 25(2)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040- 25(2))

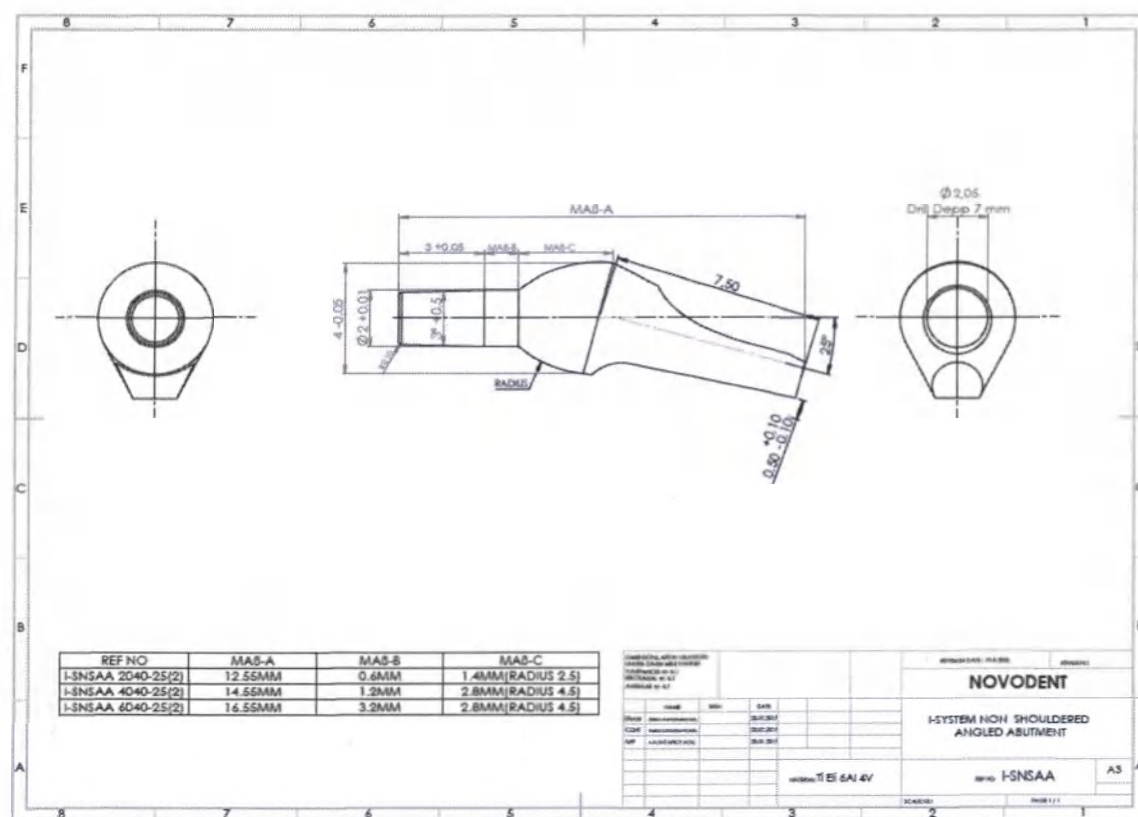Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040- 25(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 127 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050- 25(2)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050- 25(2)),

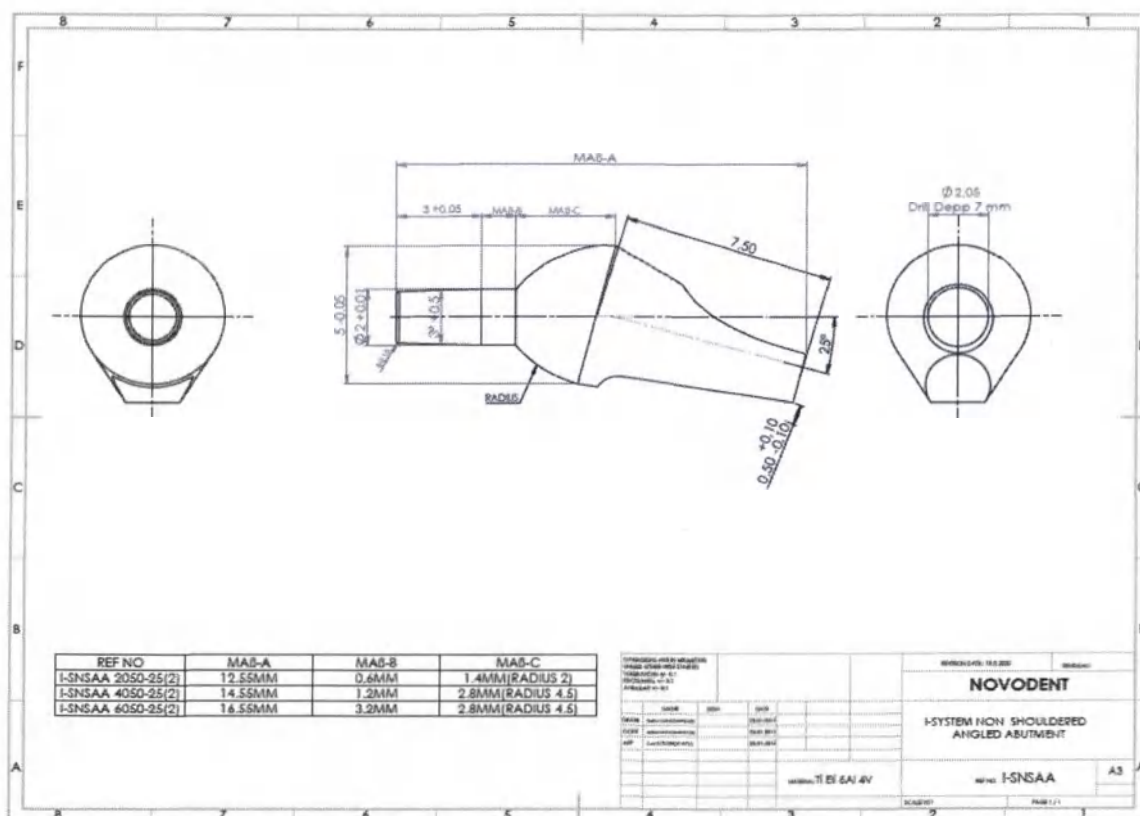
Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050- 25(2)):



Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040- 25(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040- 25(2.5)),

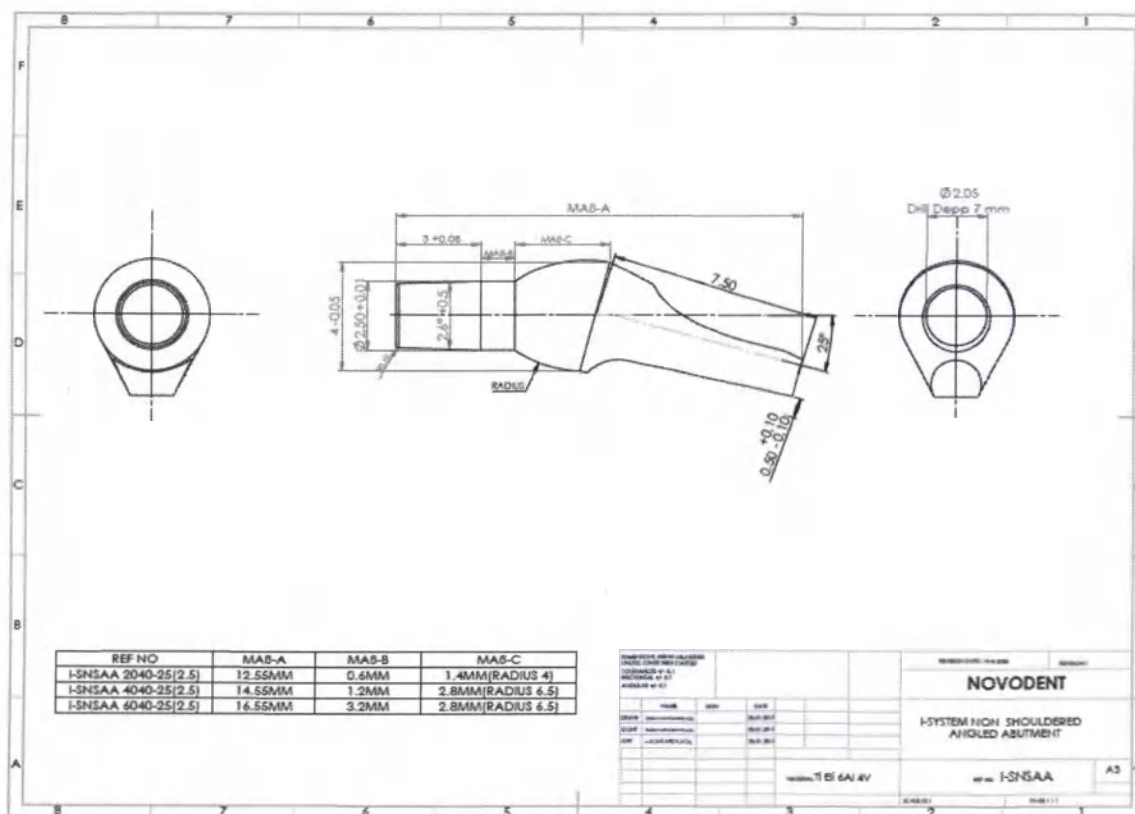Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040- 25(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050- 25(2.5)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050- 25(2.5)),

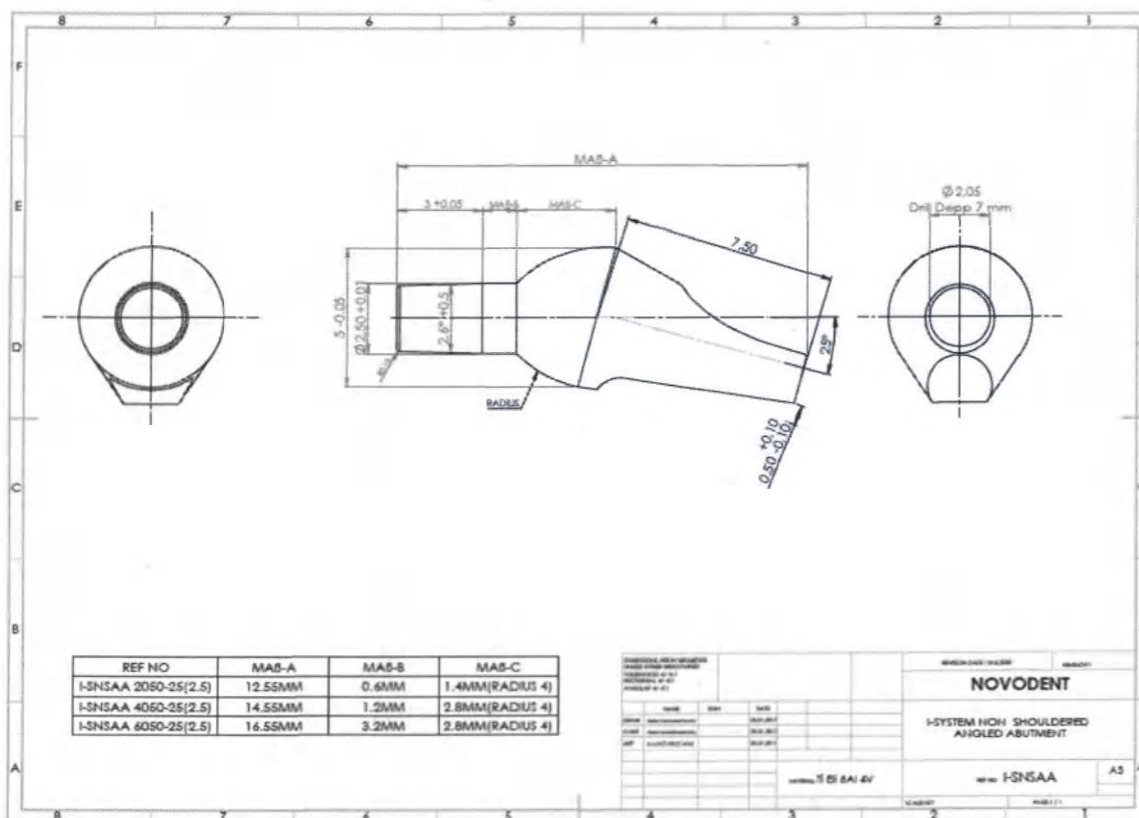Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050- 25(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 130 из 344

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050- 25(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050- 25(3)),

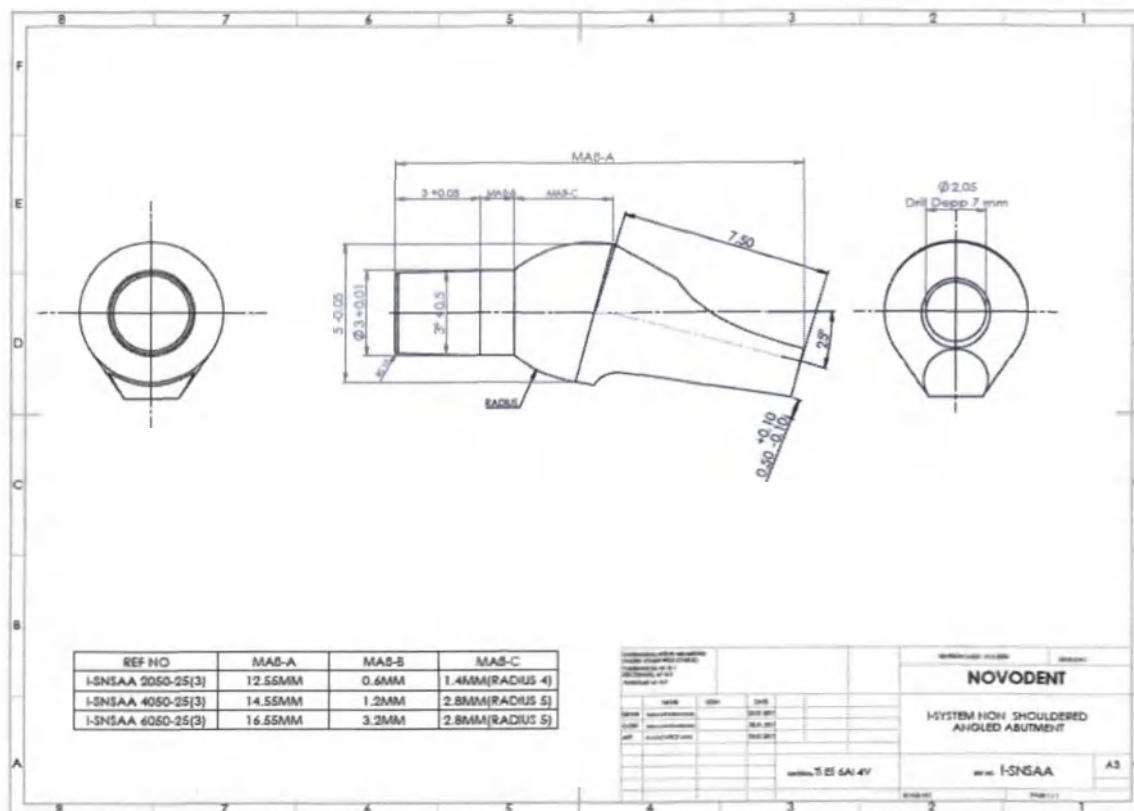
Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050- 25(3)):



Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2065- 25(3)),

Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4065- 25(3)),

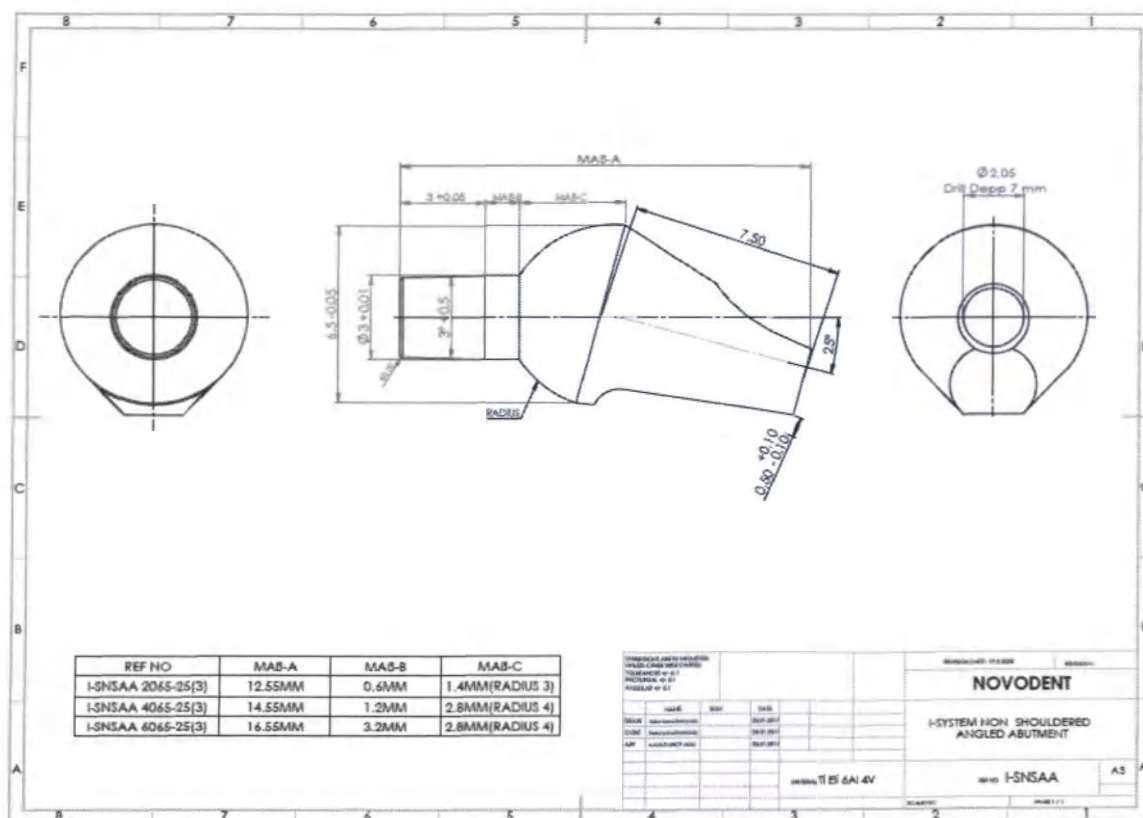
Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6065- 25(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 132 из 344

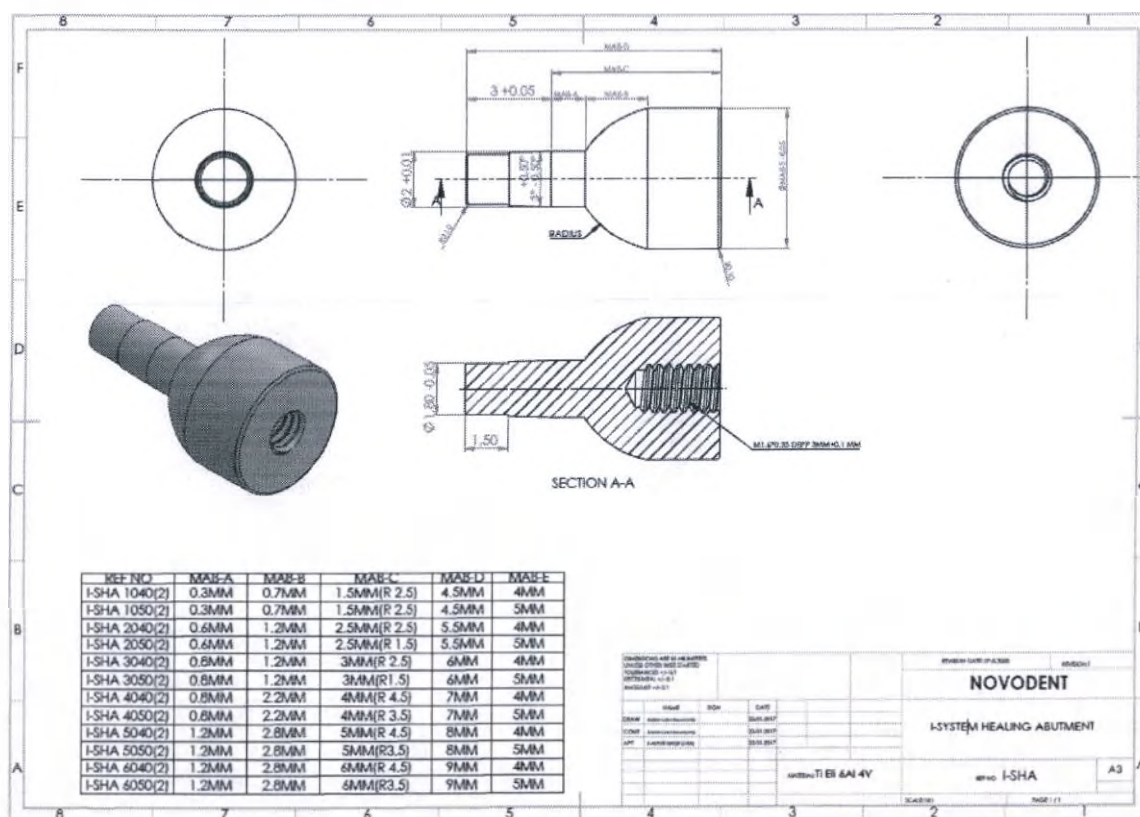Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1040(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1050(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2040(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2050(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3040(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3050(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4040(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4050(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5040(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5050(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6040(2)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6050(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

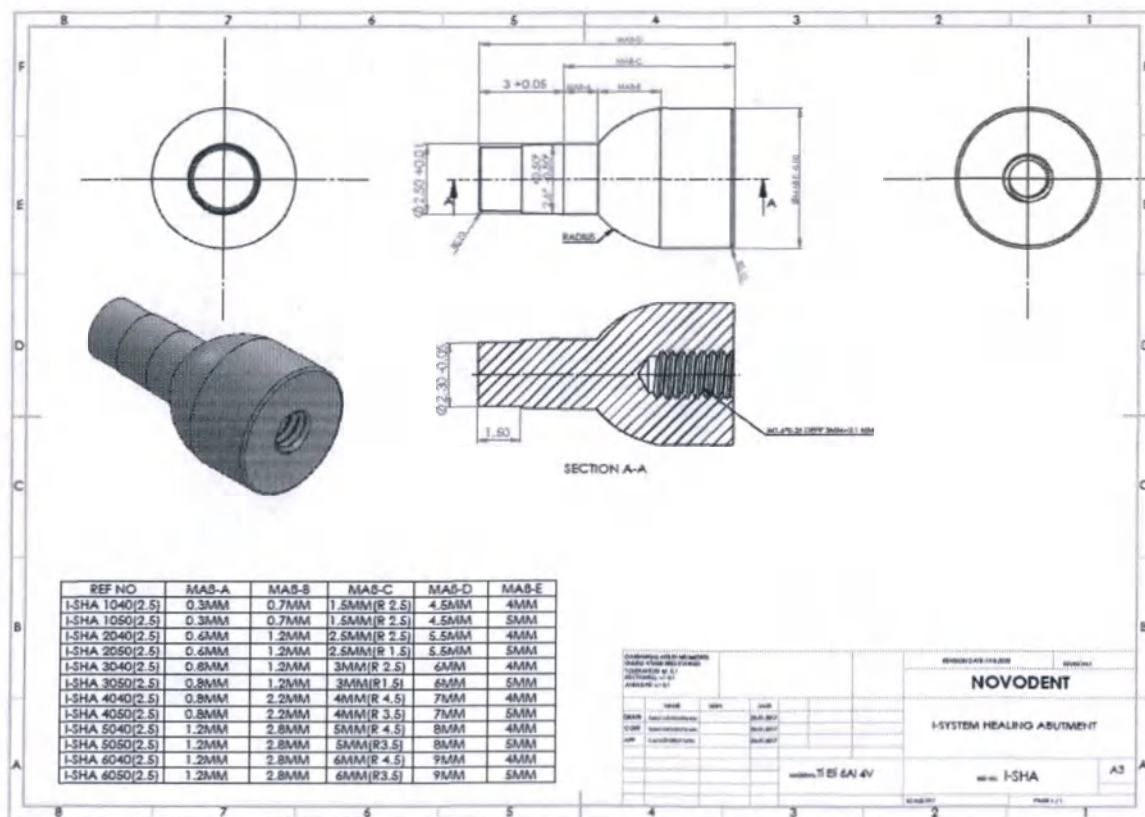Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA1040(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA1050(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA2040(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA2050(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA3040(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA3050(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA4040(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA4050(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA5040(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA5050(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA6040(2.5)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA6050(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

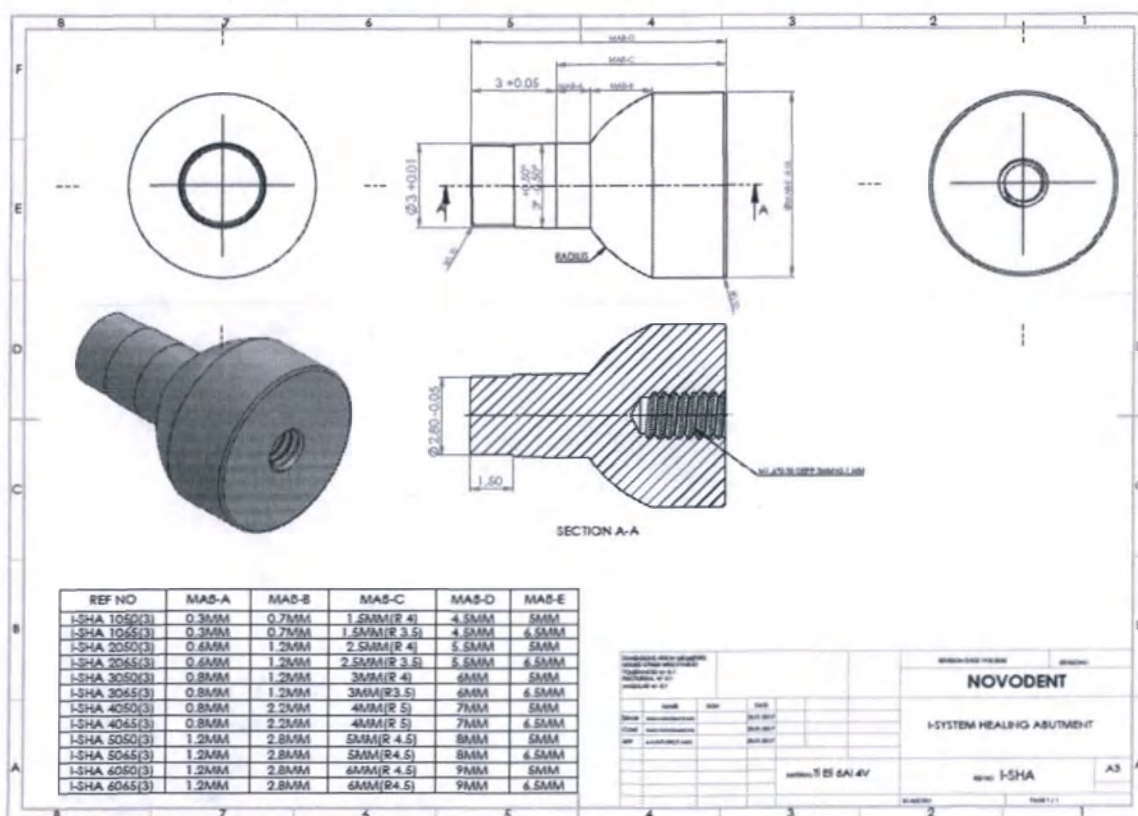Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1050(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1065(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2050(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2065(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3050(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3065(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4050(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4065(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5050(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5065(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6050(3)),
 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6065(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

F

E

D

C

B

A

Ø 1.3 X 3 off hole

2.75

2.75

S

0.60

0.20

4

0.40

±0.02

±0.02

±0.05

±0.05

Ø 6.50 -0.05

M1.6*0.35

SECTION A-A

NOVODENT
I-SYSTEM SINUS ABUTMENT

REF: I-SSINA S065(3)

A3

[illegible]

Страница 136 из 344

Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA10(2)),

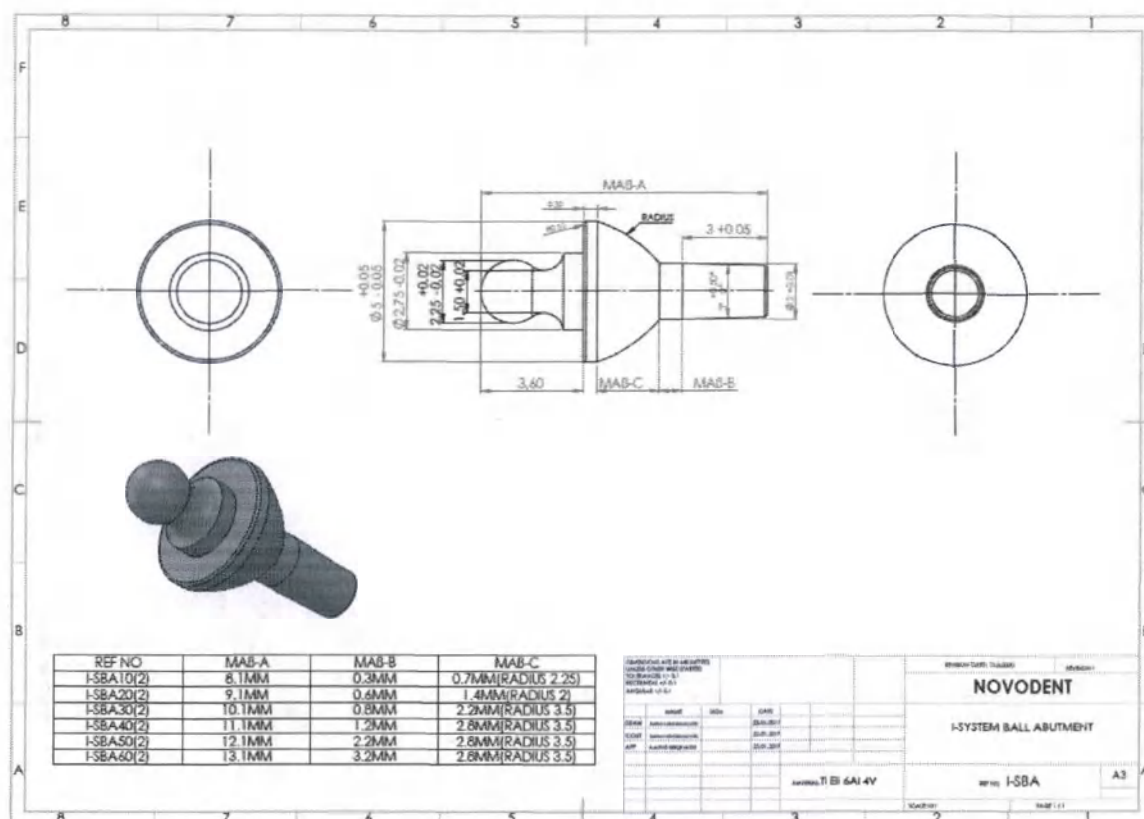
Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA20(2)),

Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA30(2)),

Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA40(2)),

Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA50(2)),


Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA60(2)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 137 из 344

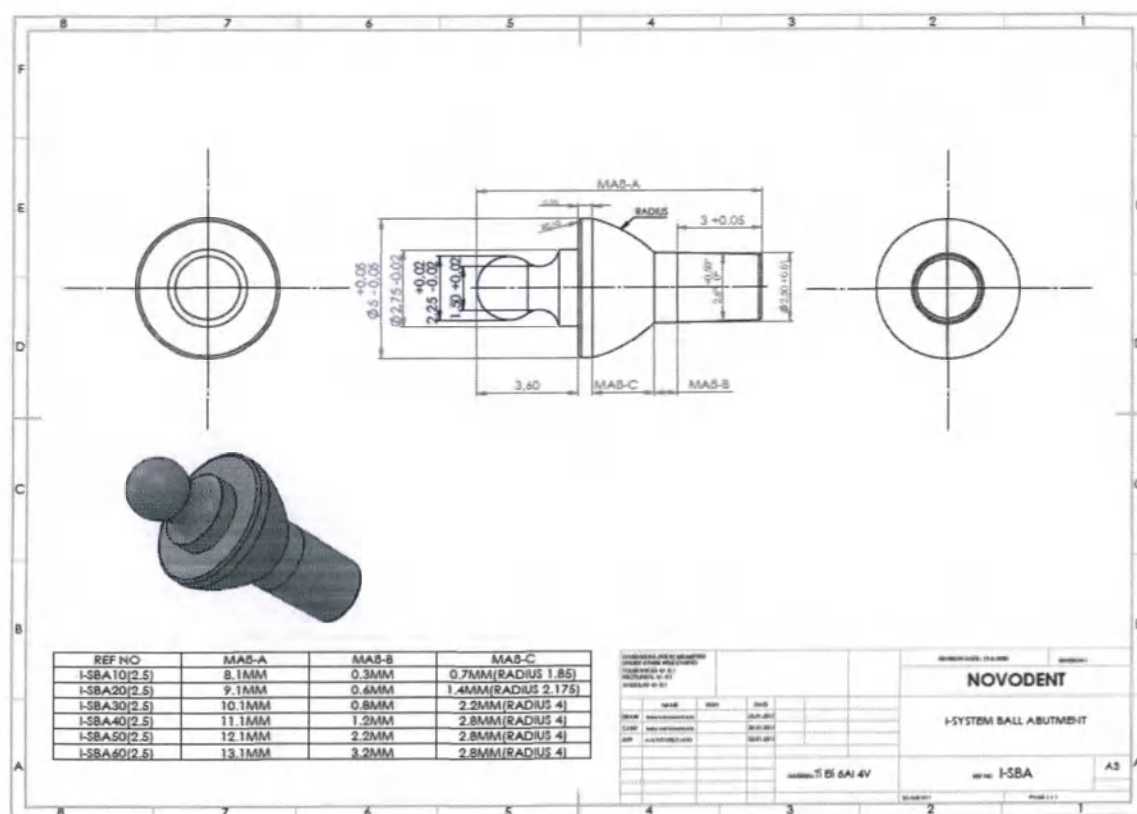Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA10(2.5)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA20(2.5)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA30(2.5)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA40(2.5)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA50(2.5)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA60(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

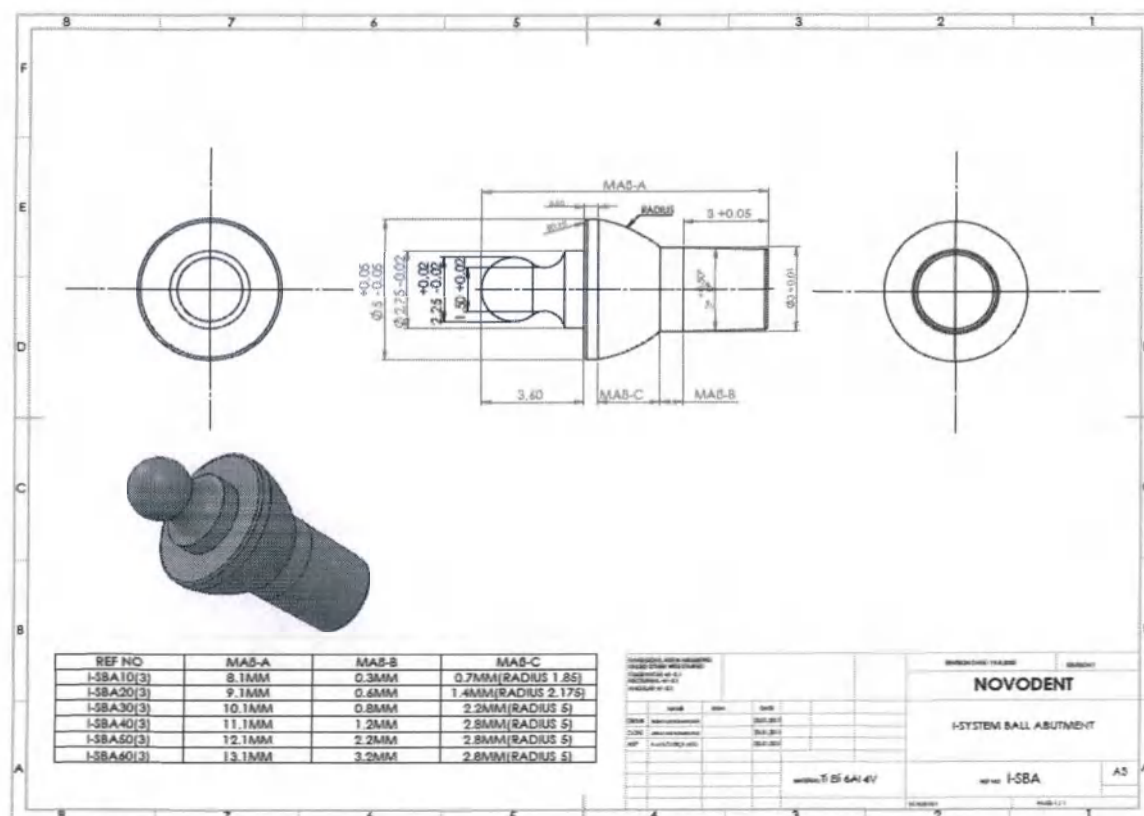Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA10(3)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA20(3)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA30(3)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA40(3)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA50(3)),
 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA60(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050(2)),

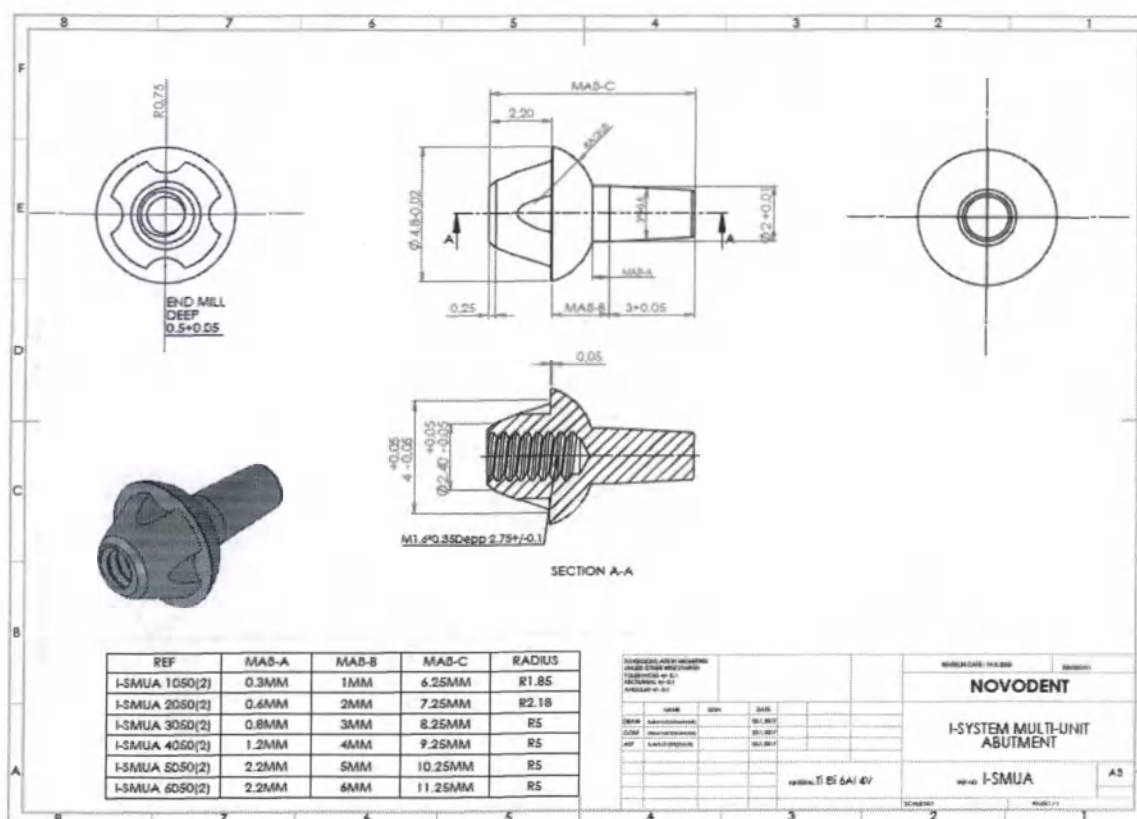
Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050(2)),


Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050(2)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 140 из 344

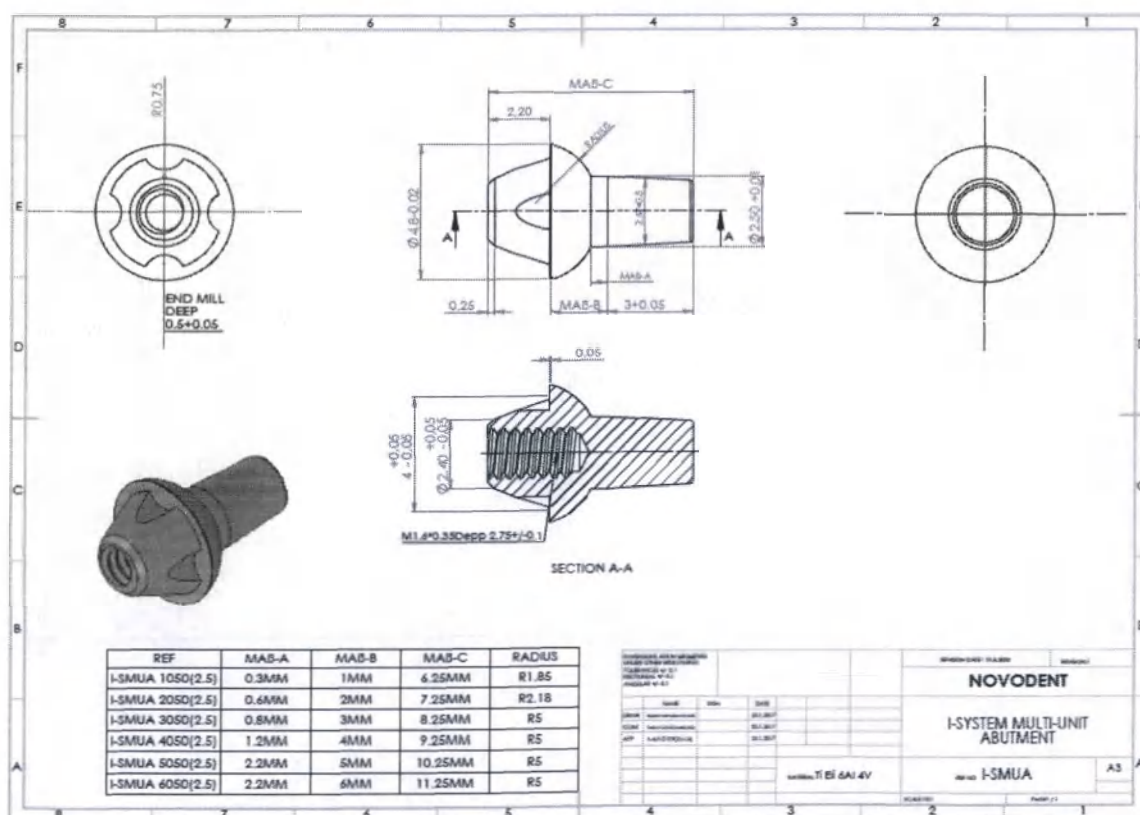Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050(2.5)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050(2.5)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050(2.5)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050(2.5)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050(2.5)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

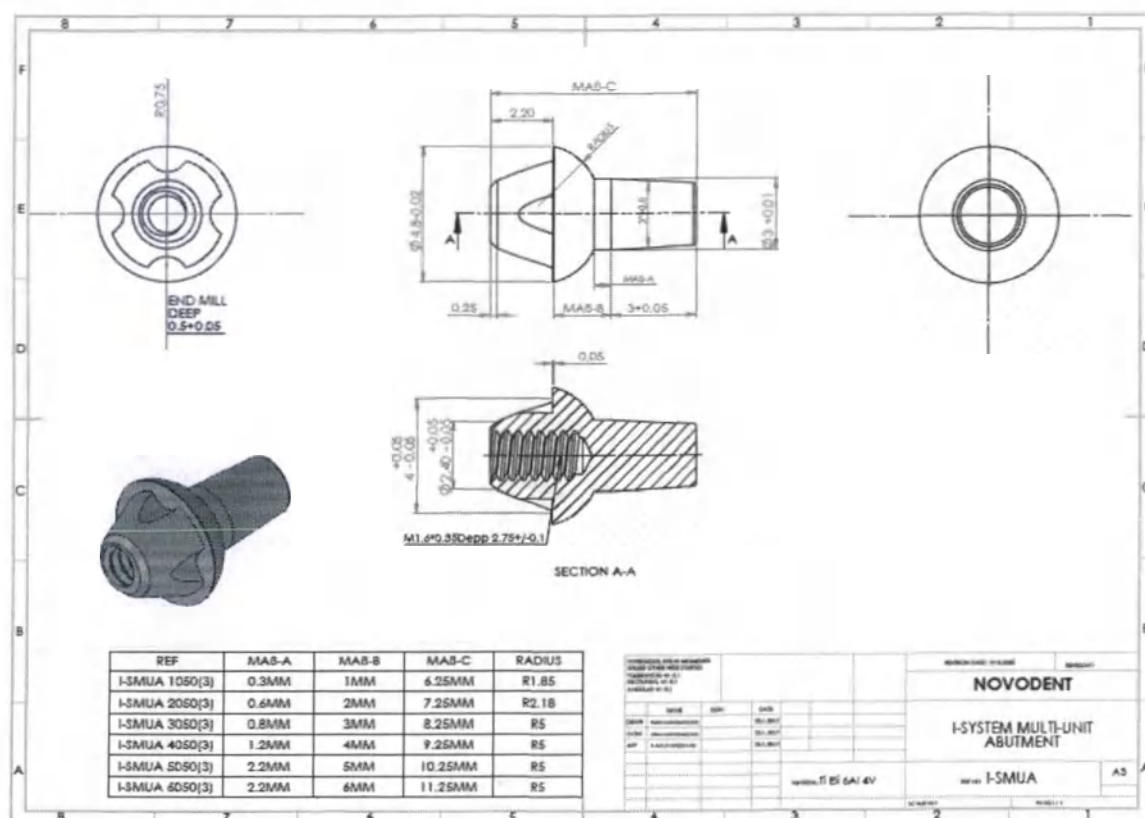Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050(3)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050(3)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050(3)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050(3)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050(3)),
 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-17(2)),

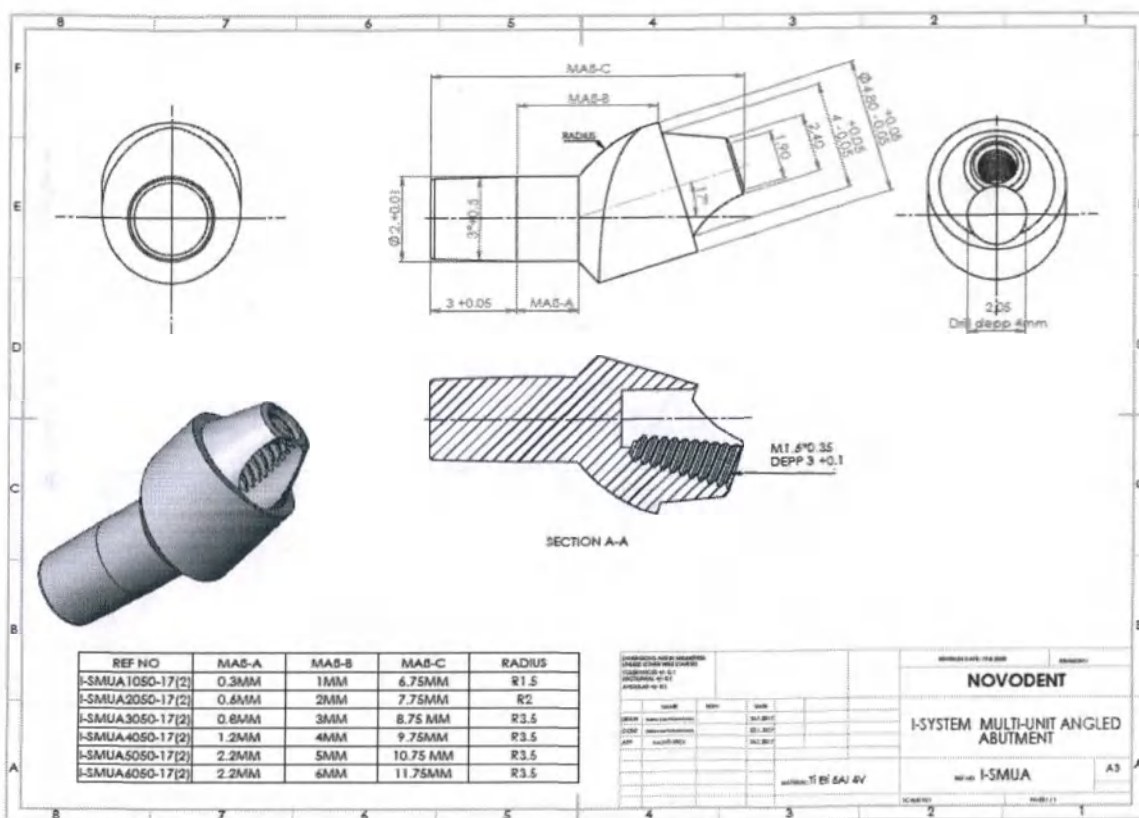
Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA2050-17(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA3050-17(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA4050-17(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA5050-17(2)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA6050-17(2)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA6050-33(2)):

REF NO	MA8-A	MA8-B	MA8-C	RADIUS
[-SMUA1050-33(2)]	0.3MM	1MM	7.6MM	R1.5
[-SMUA2050-33(2)]	0.6MM	2MM	8.6MM	R2
[-SMUA3050-33(2)]	0.8MM	3MM	9.6MM	R3.5
[-SMUA4050-33(2)]	1.2MM	4MM	10.6MM	R3.5
[-SMUA5050-33(2)]	2.2MM	5MM	11.6MM	R3.5
[-SMUA6050-33(2)]	2.2MM	6MM	12.6MM	R3.5

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-17(2.5)),

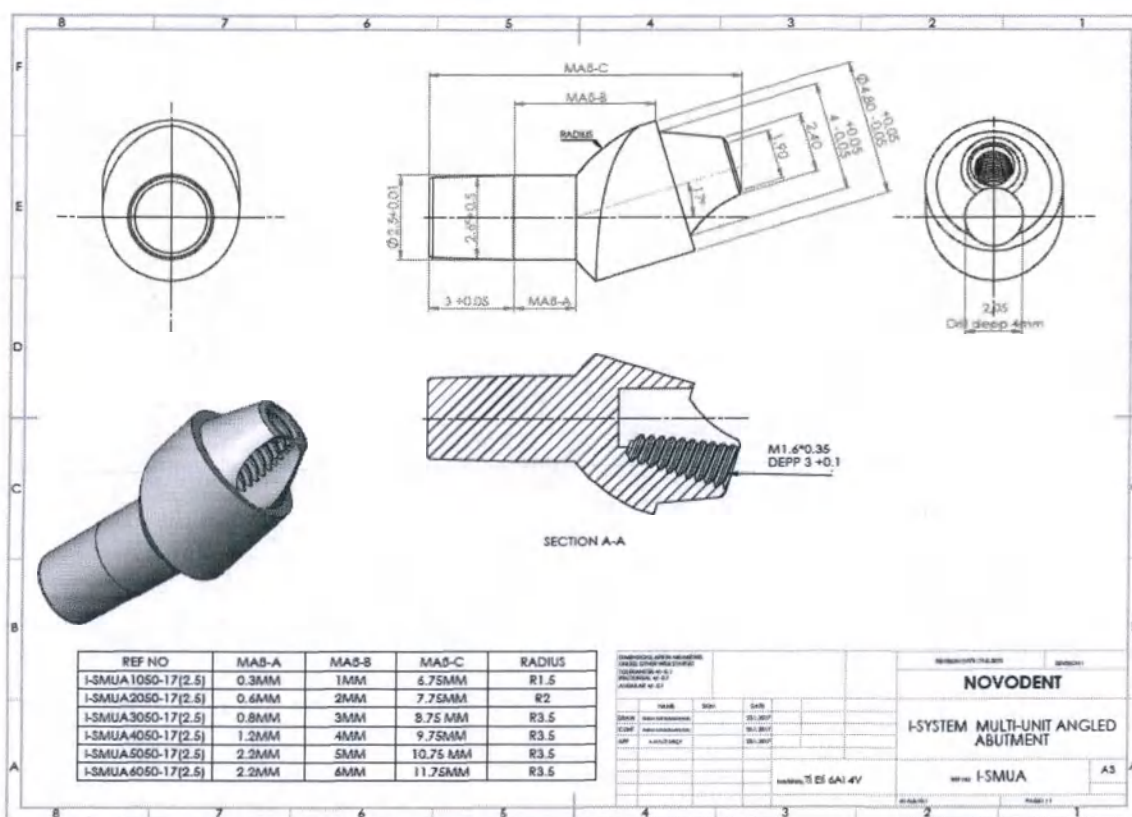
Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA2050-17(2.5))

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-17(2.5))

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-17(2.5))

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-17(2.5))

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-17(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 145 из 344

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-33(2.5)),

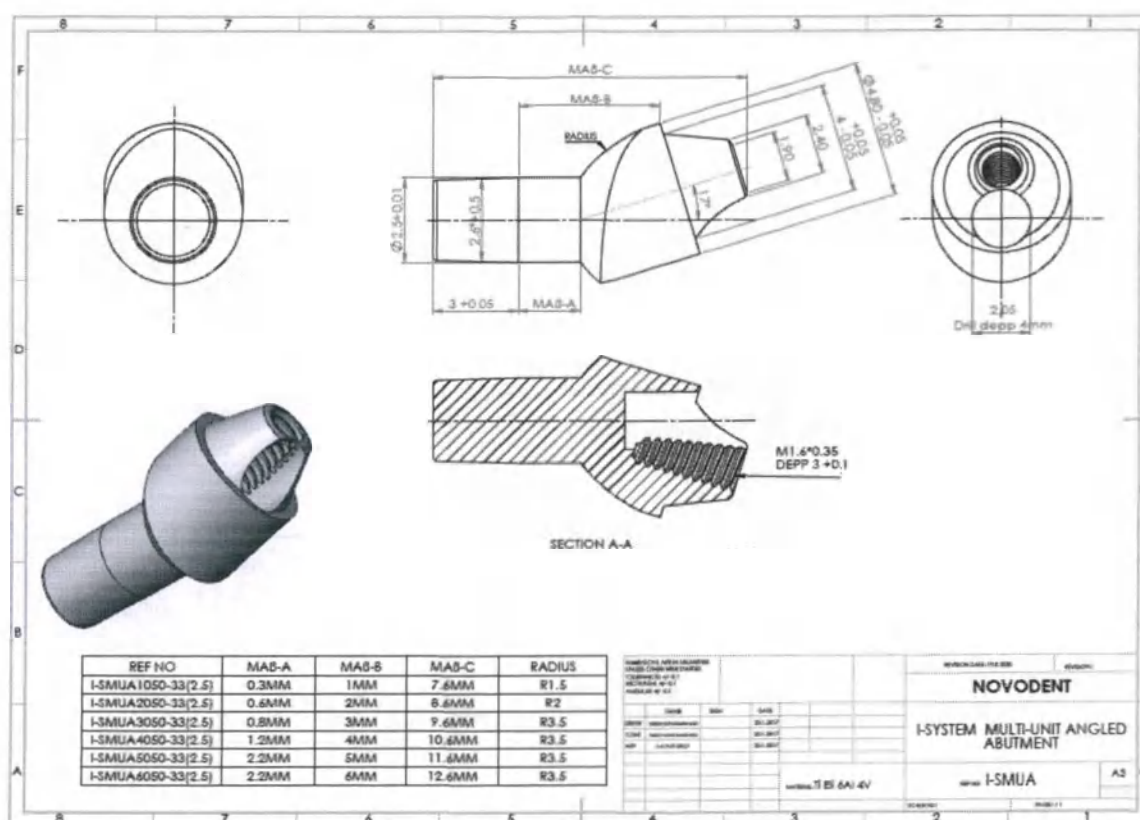
Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050-33(2.5)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-33(2.5)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-33(2.5)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-33(2.5)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-33(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050-17(3)),

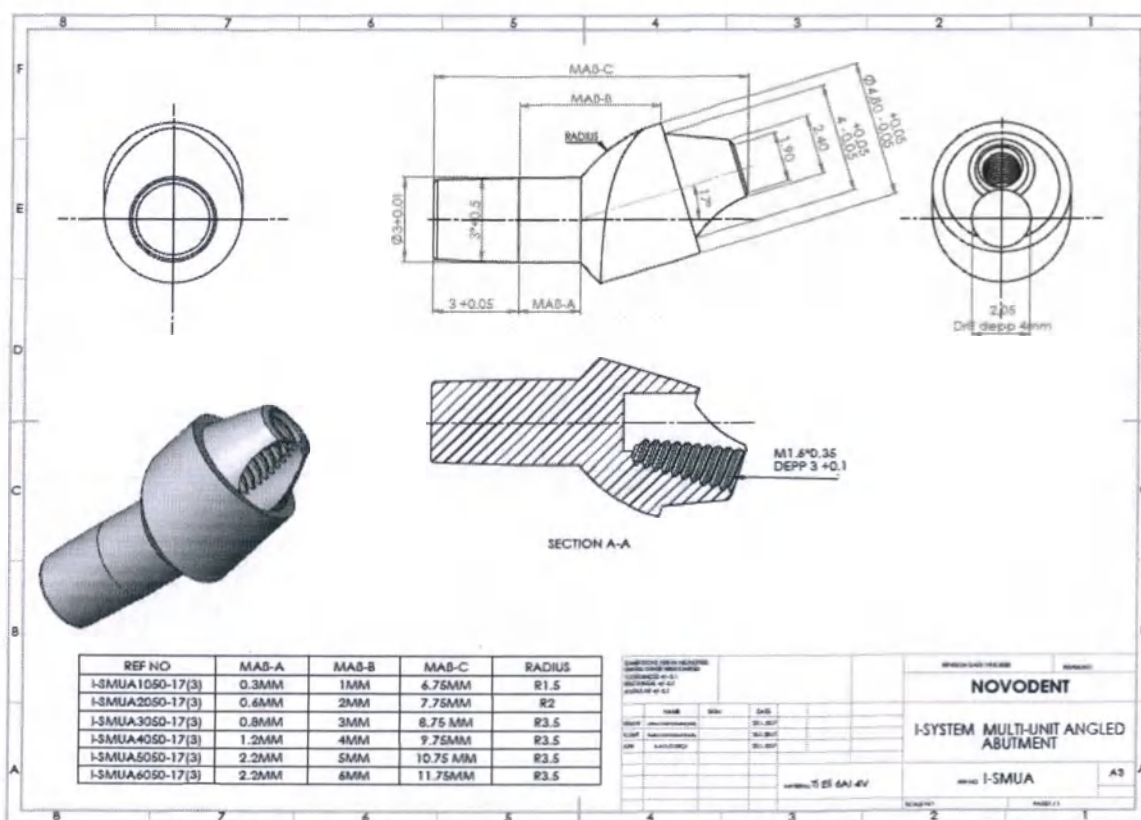
Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050-17(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-17(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-17(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-17(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-17(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 147 из 344

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050-33(3)),

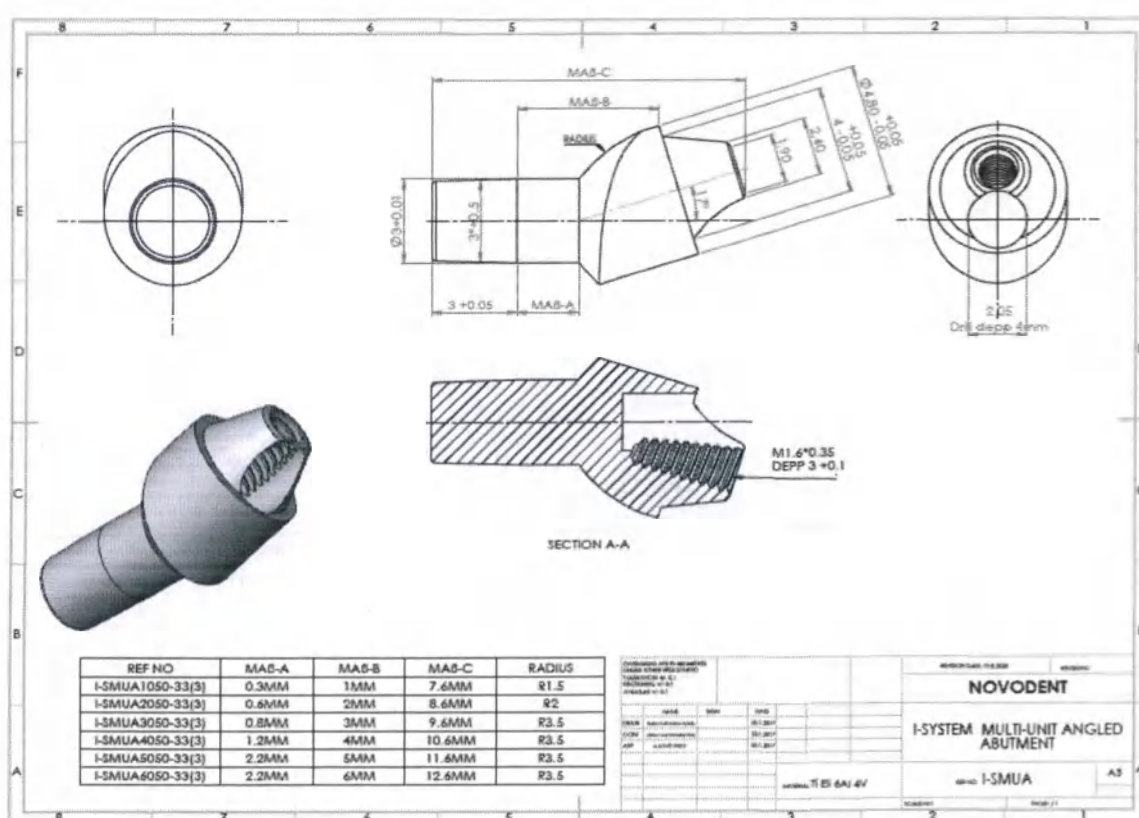
Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050-33(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-33(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-33(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-33(3)),

Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-33(3)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 148 из 344

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA10(2)),

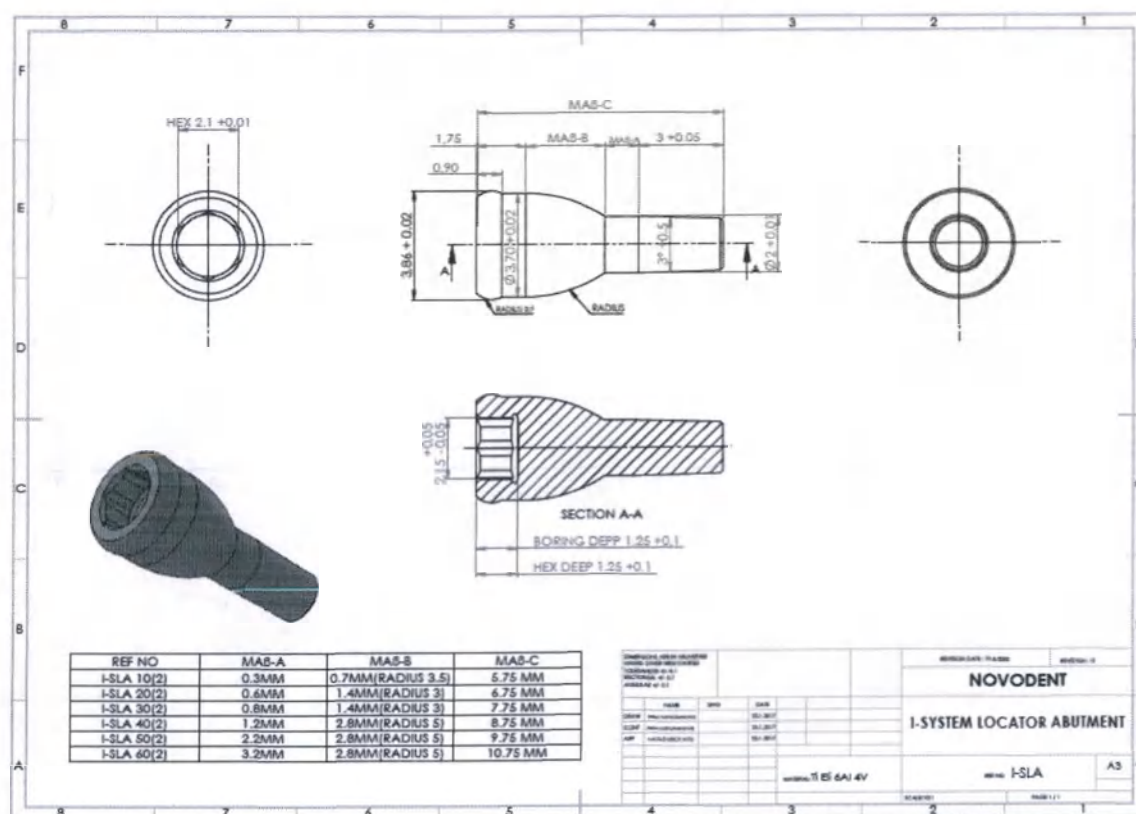
Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA20(2)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA30(2)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA40(2)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA50(2)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA60(2)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA10(2.5)),

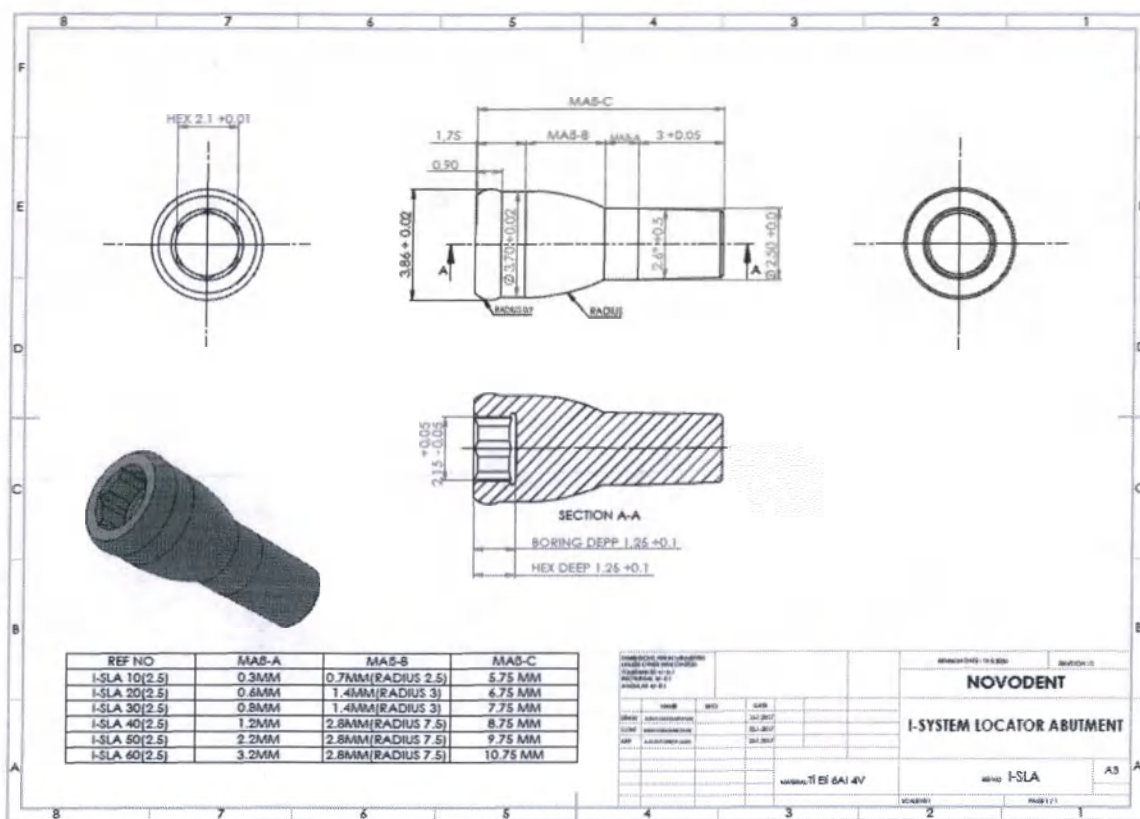
Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA20(2.5)),

Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA30(2.5)),

Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA40(2.5)),

Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA50(2.5)),

Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA60(2.5)):



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA10(3)),

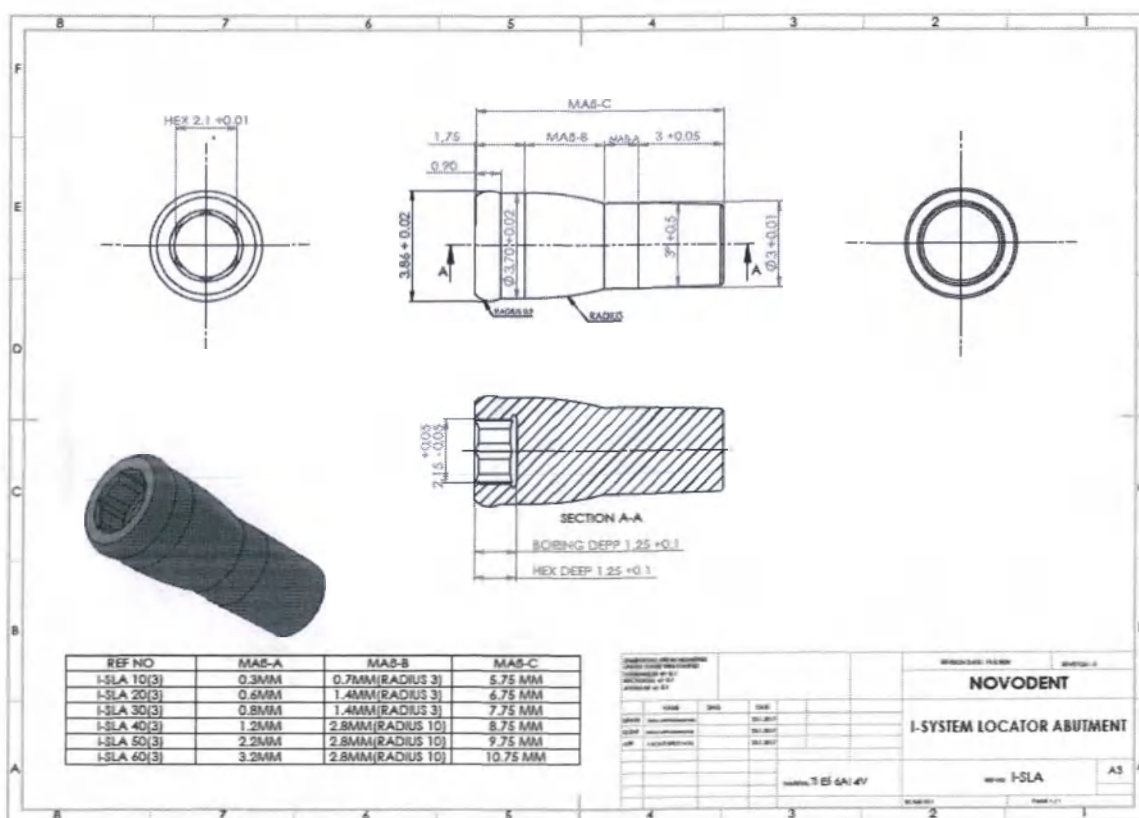
Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA20(3)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA30(3)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA40(3)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA50(3)),

Абатмент i-system Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA60(3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 151 из 344

Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA1045(2)),

Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA2045(2)),

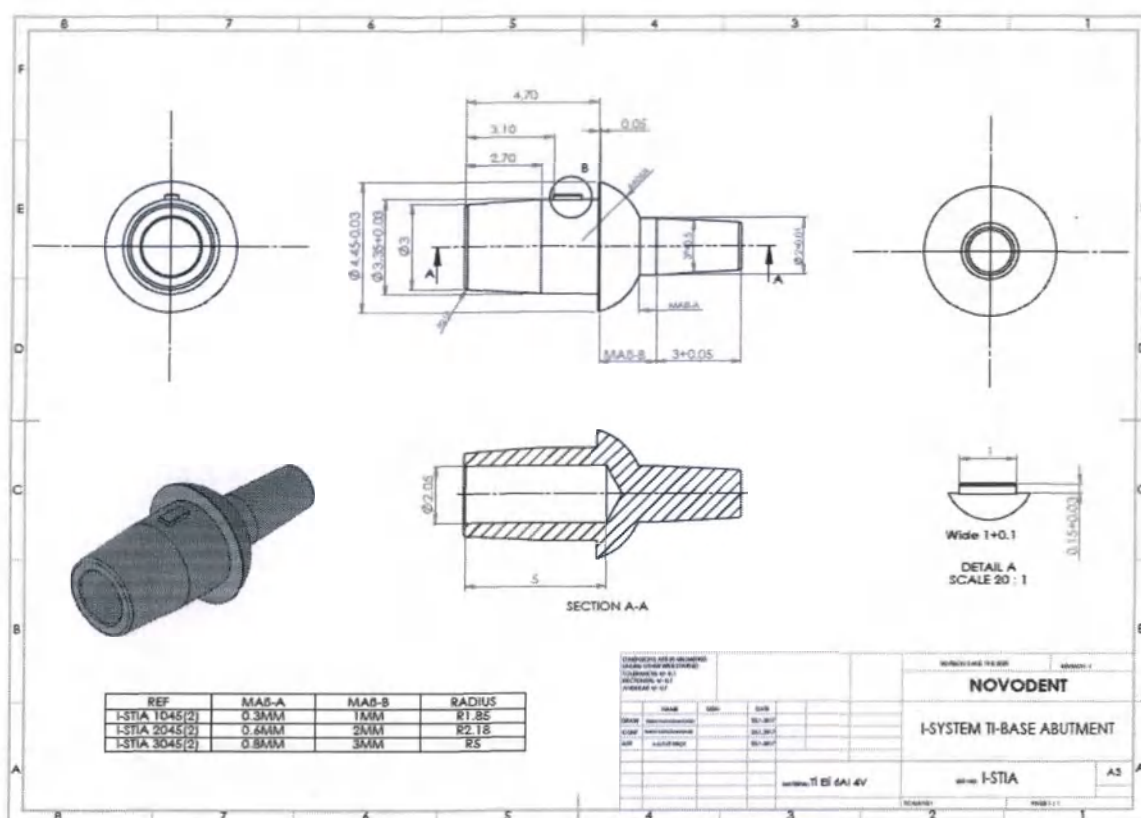Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA3045(2)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 152 из 344

Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA1045(2.5)),

Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA2045(2.5)),

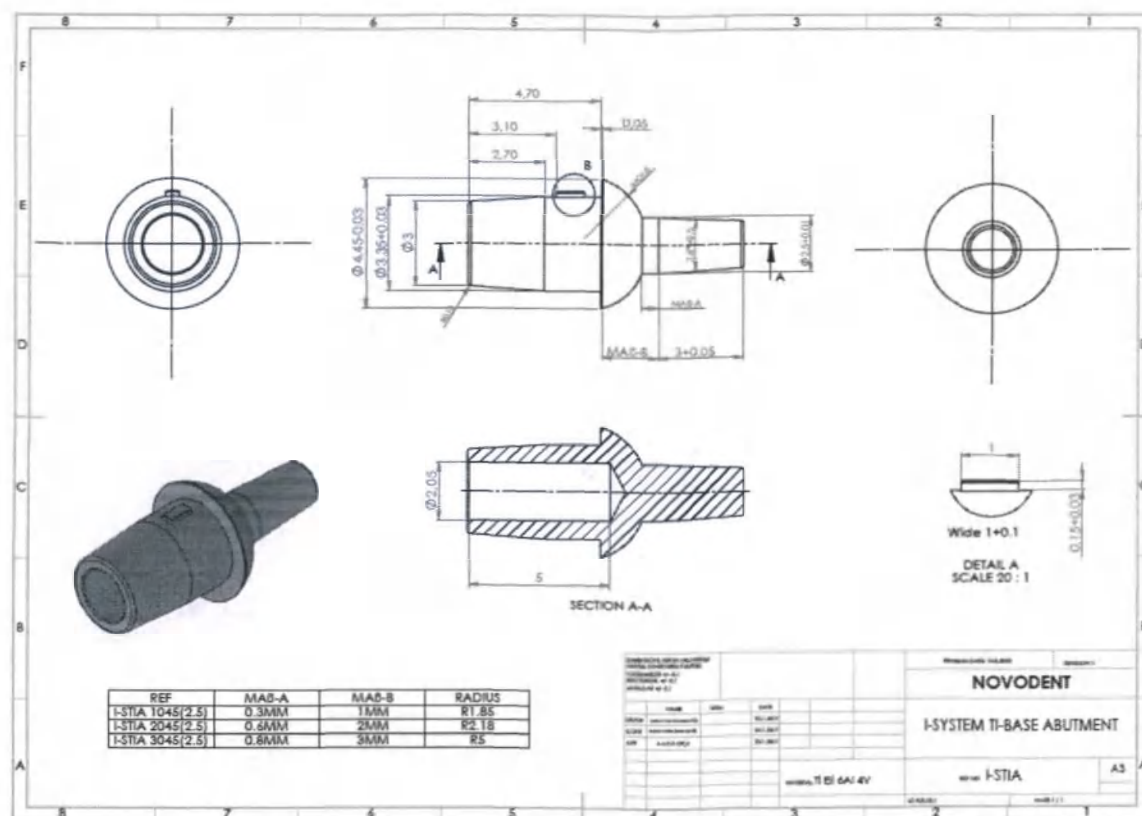Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA3045(2.5)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 153 из 344

Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA1045(3)),

Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA2045(3)),

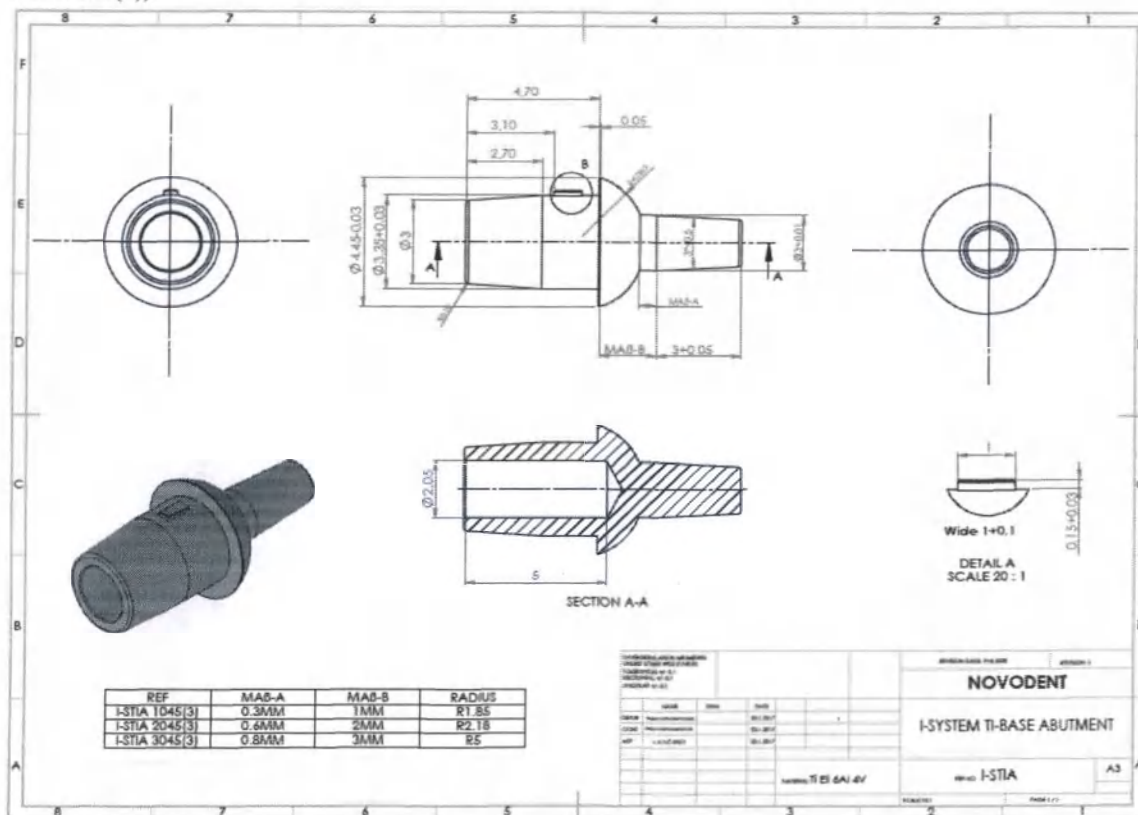Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA3045(3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 154 из 344

2. Лабораторные аналоги:

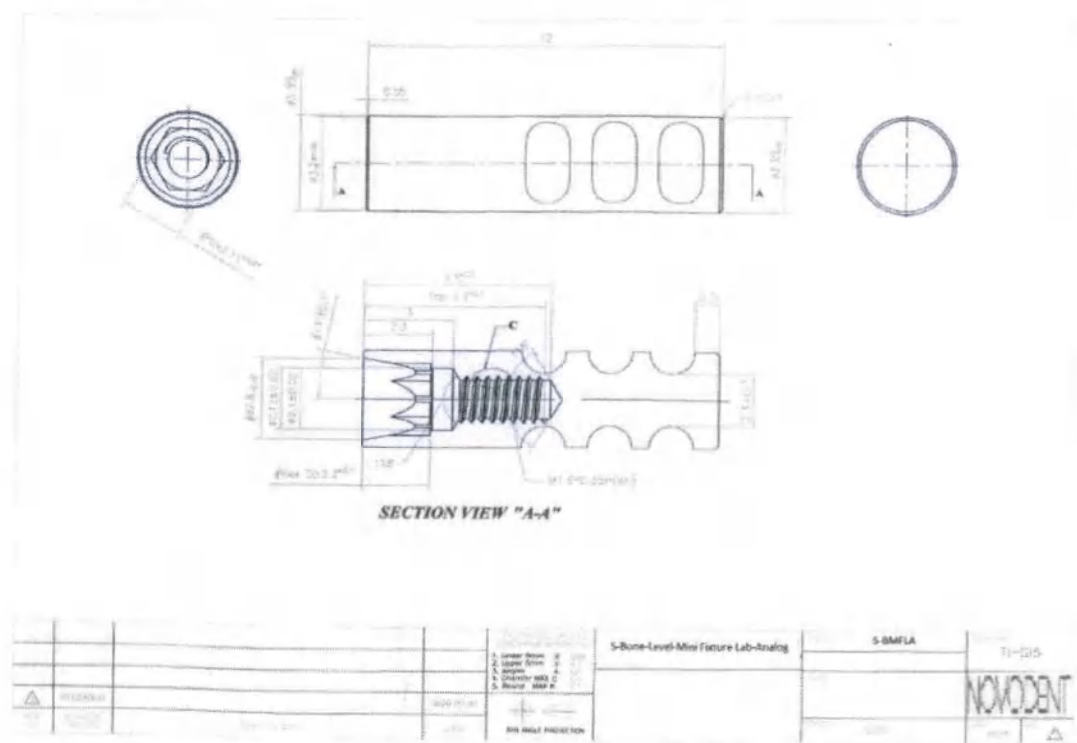Лабораторный аналог Bone Level Mini Fixture Lab-Analog (артикул S-BMFLA)




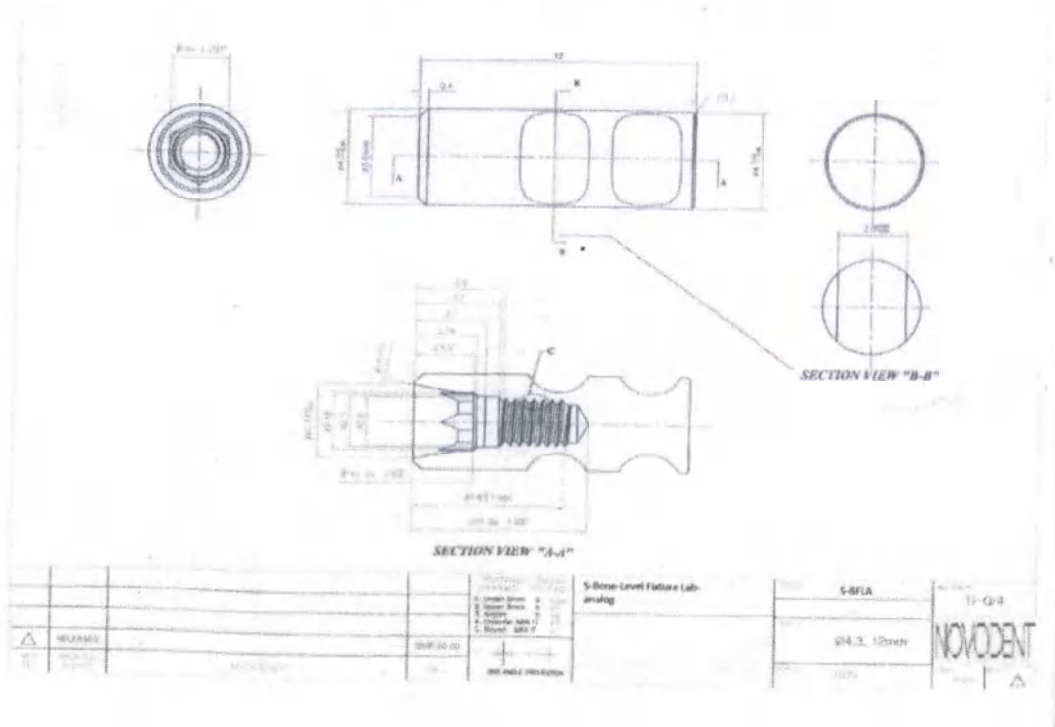Лабораторный аналог Bone Level Fixture Lab-Analog (артикул S-BFLA)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

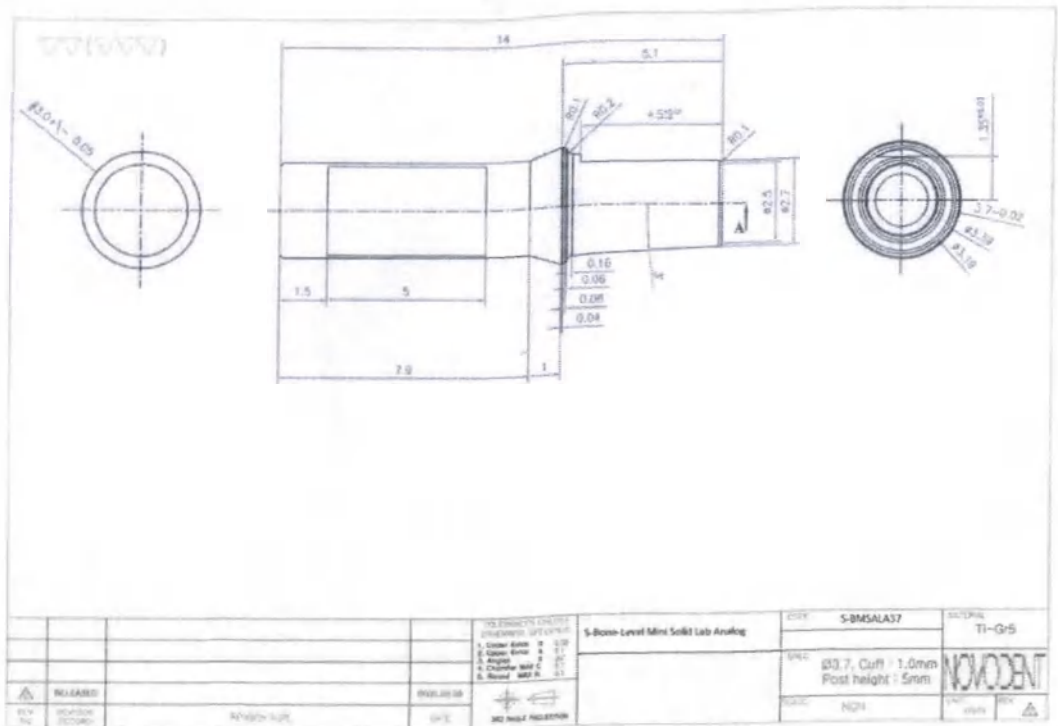Лабораторный аналог Bone Level Mini Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BMSALA37)




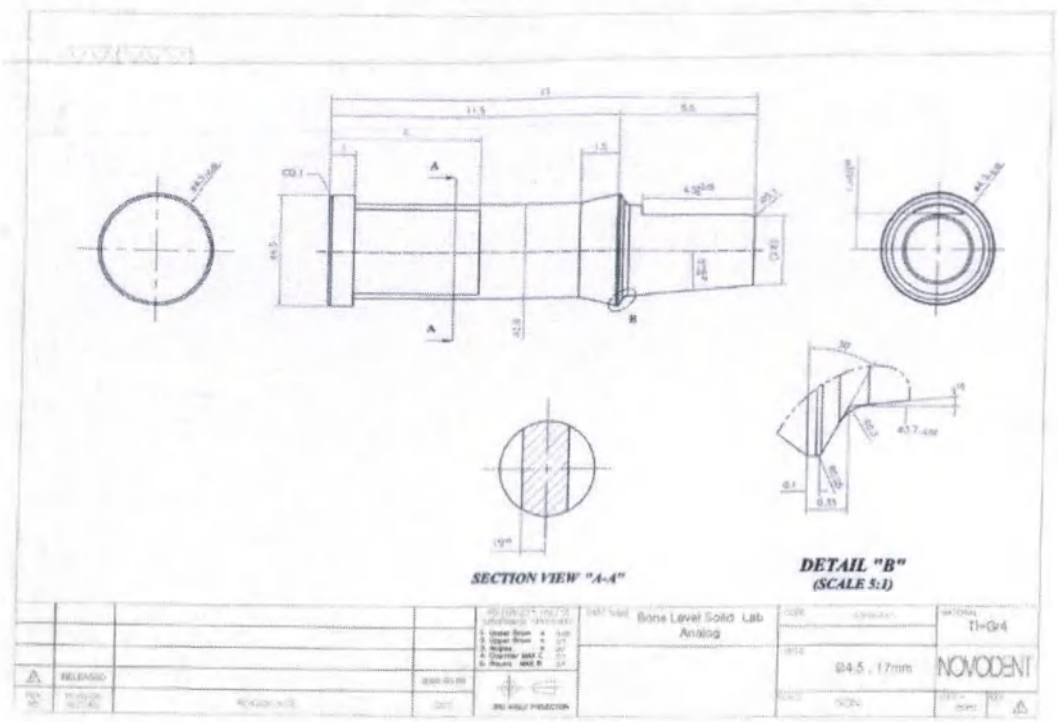Лабораторный аналог Bone Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BSALA45)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantwiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

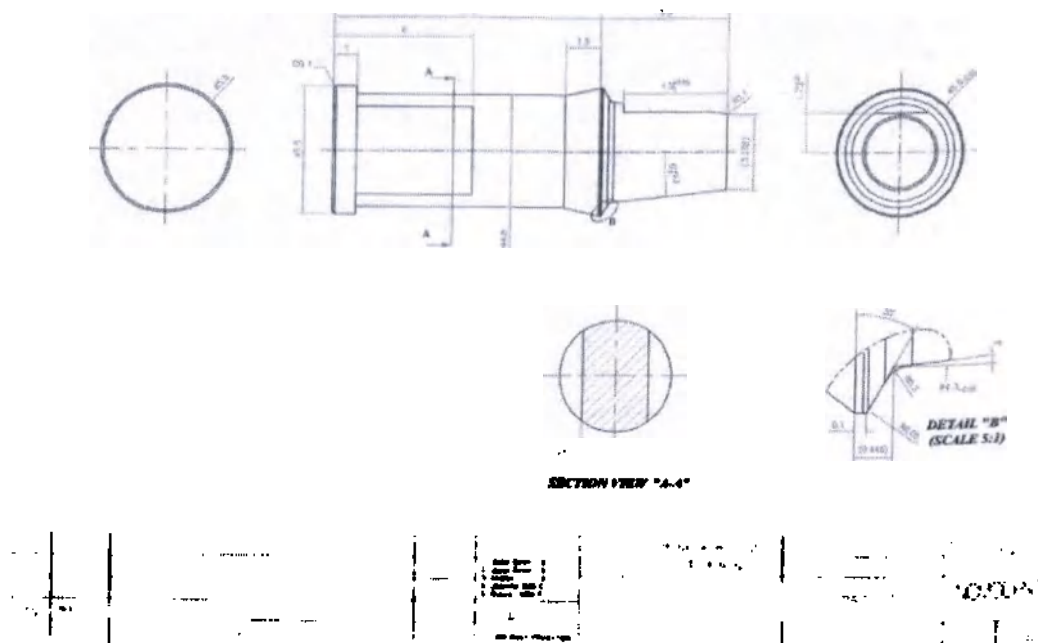Лабораторный аналог Bone Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BSALA55)




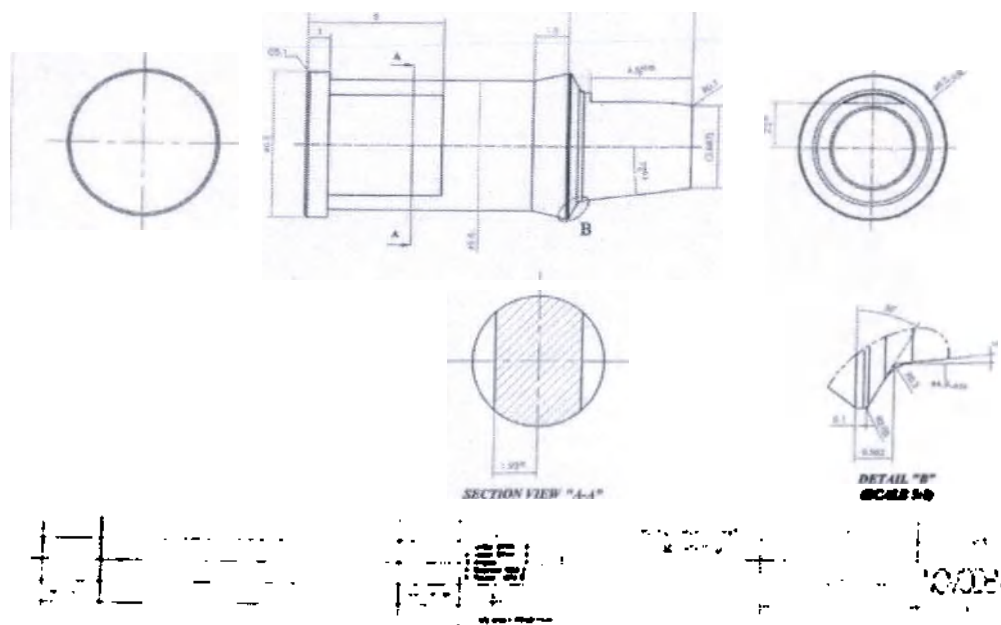Лабораторный аналог Bone Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BSALA65)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

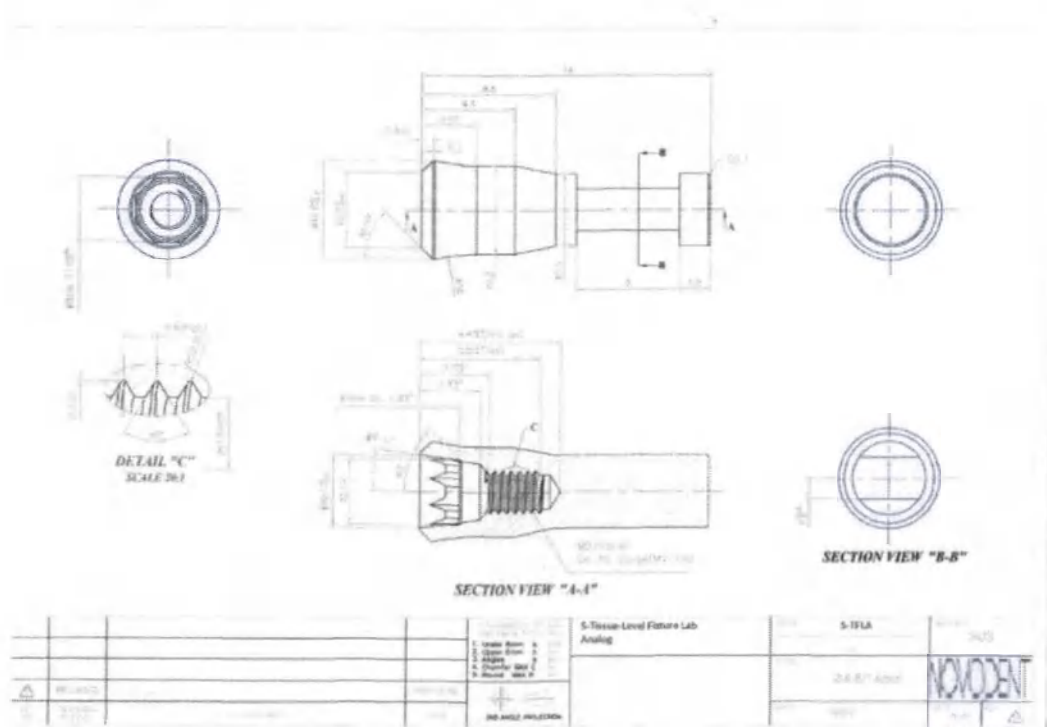Лабораторный аналог Tissue Level Fixture Lab-Analog (артикул S-TFLA)



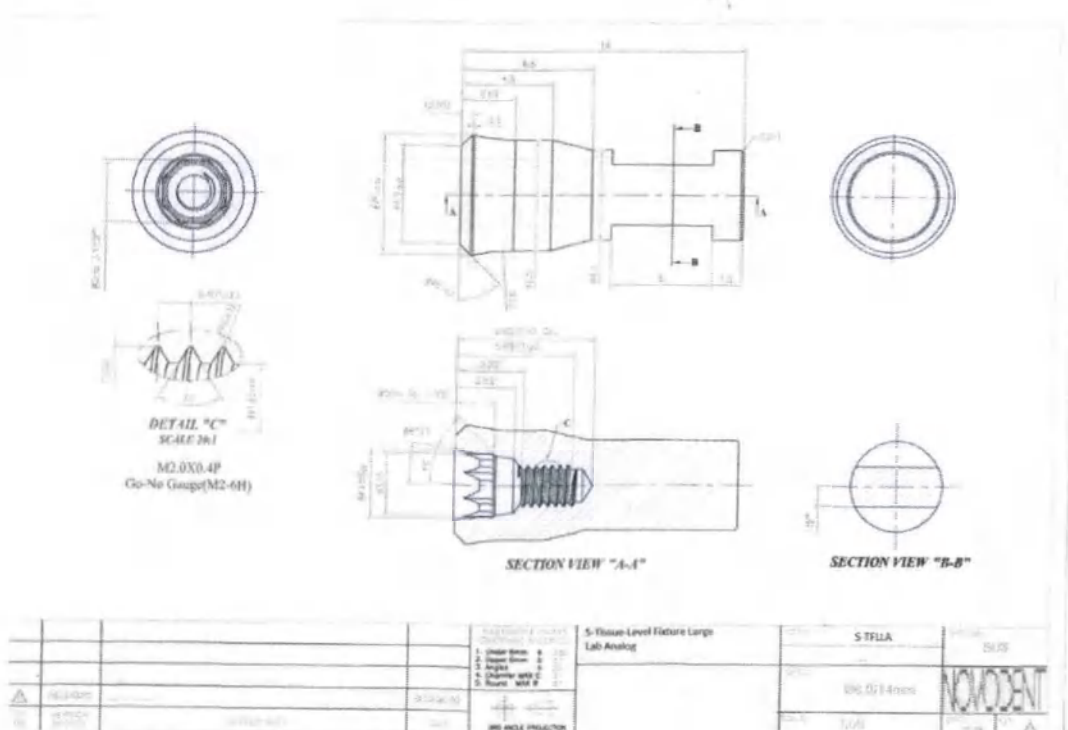Лабораторный аналог Tissue Level Fixture Large Lab-Analog (артикул S-TFLLA)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

[illegible]

Technical drawing of a 5-Tissue-Level Solid Abutment. The drawing includes a top view, a side view, and a detail 'A' (Scale 5:1).

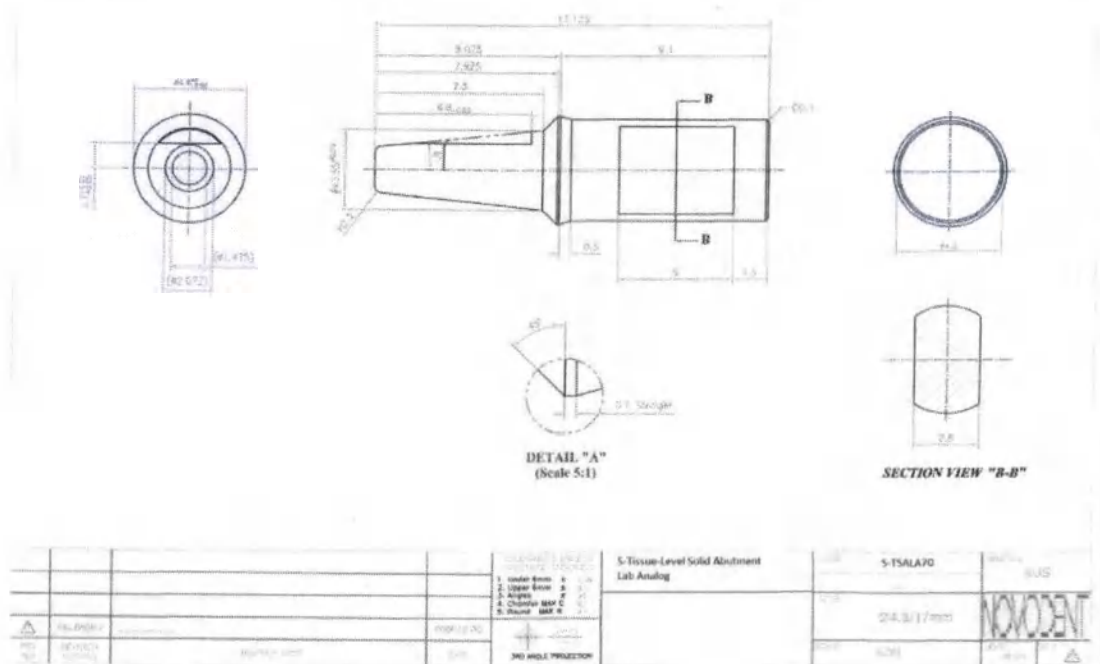
The top view shows concentric circles with dimensions 44.83, 40.28, and 39.75.

The side view shows a tapered abutment with dimensions 55.025, 8.325, 8.422, 3.0, 11.6, 20.5, 1.8, and 1.0.


Detail 'A' (Scale 5:1) shows a cross-section of the abutment with a 45-degree angle and a 0.1 mm gap.

Страница 159 из 344

Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-TSALA70)




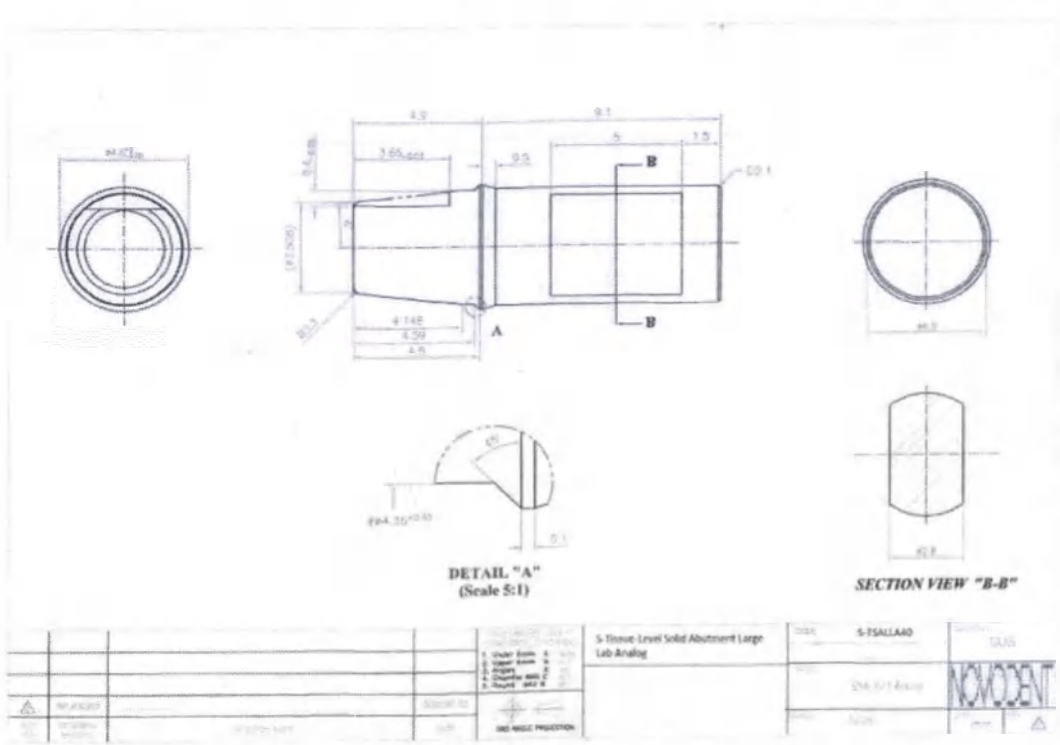Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Large Lab-Analog (артикул S-TSALLA40)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

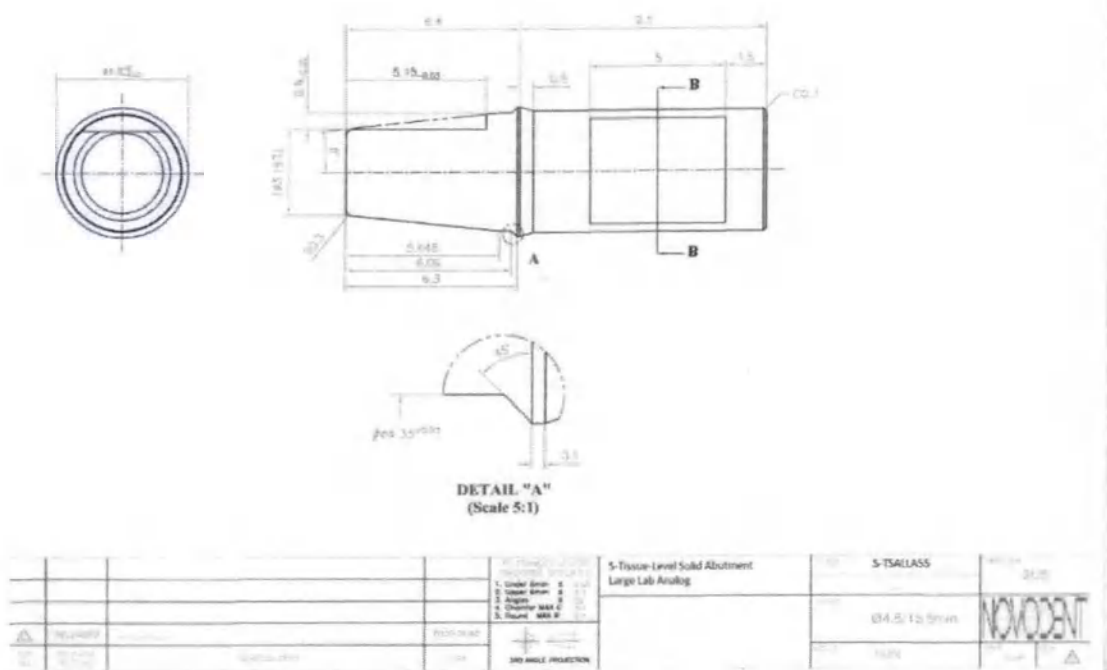Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Large Lab-Analog (артикул S-TSALLA55)




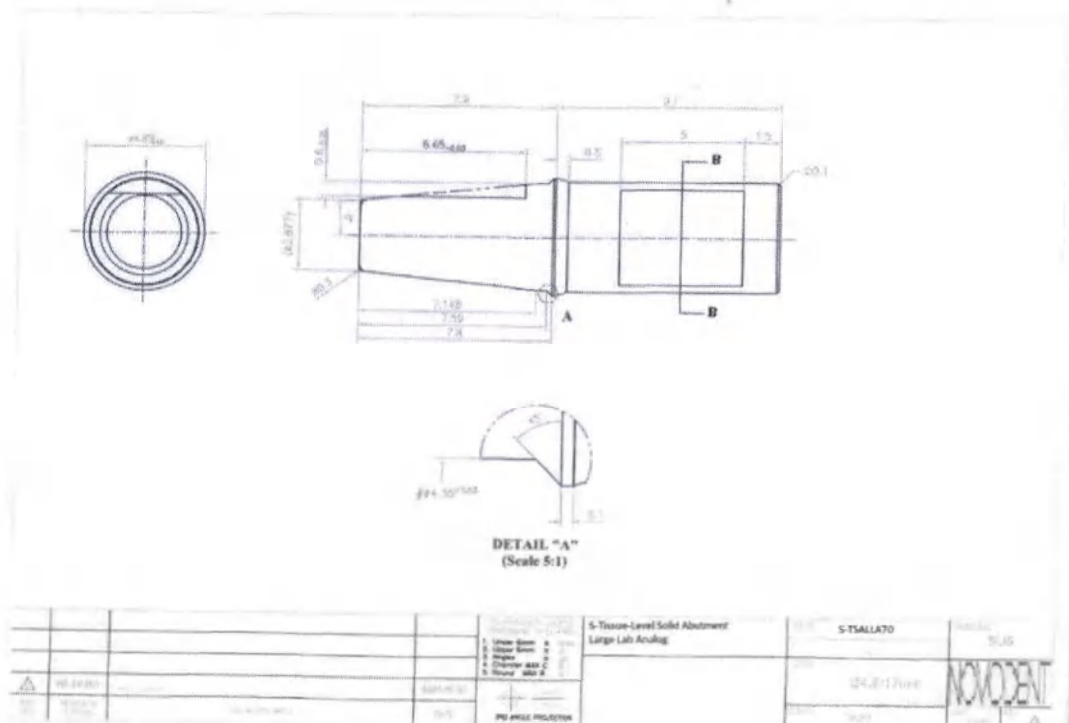Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Large Lab-Analog (артикул S-TSALLA70)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

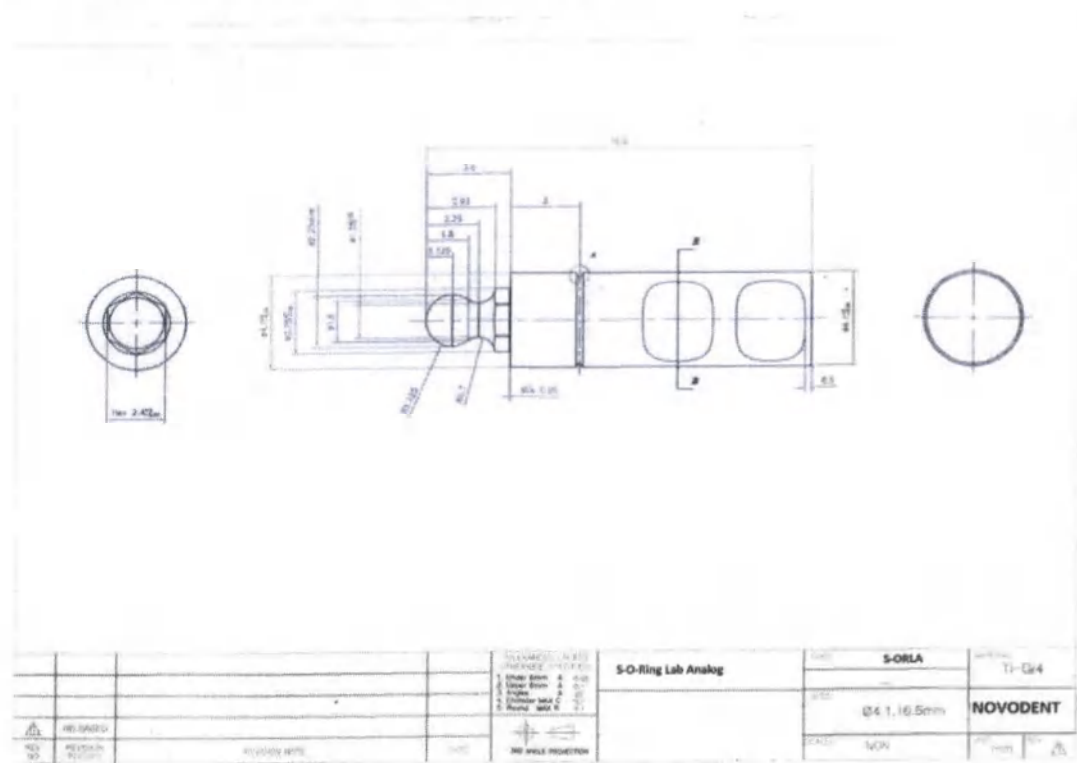Лабораторный аналог O-Ring Lab Analog (артикул S-ORLA)




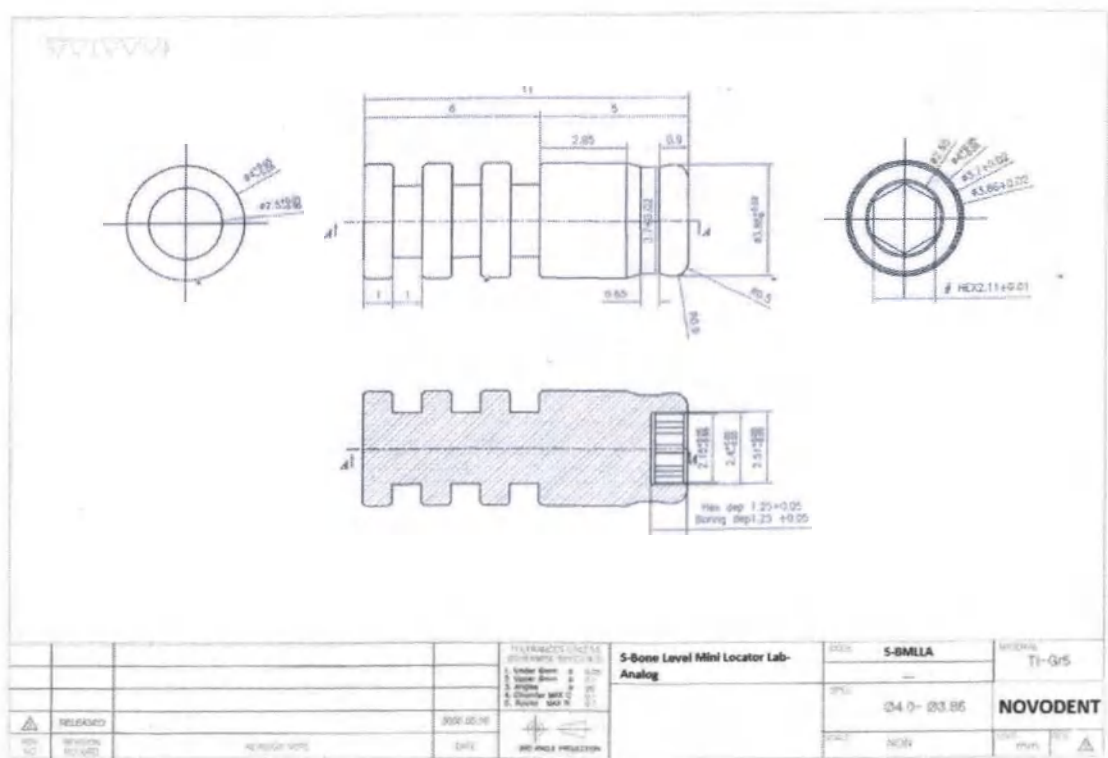Лабораторный аналог Bone Level Mini Locator Lab-Analog (артикул S-BMLLA)





Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

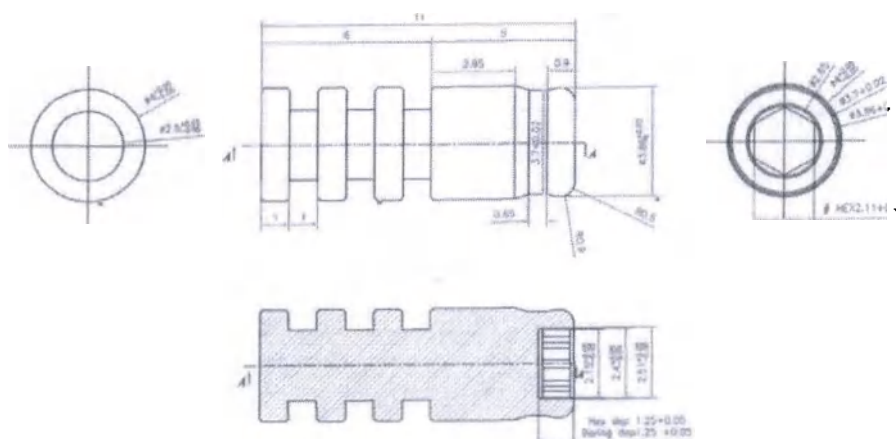Лабораторный аналог Bone Level Locator Lab-Analog (артикул S-BLLA)




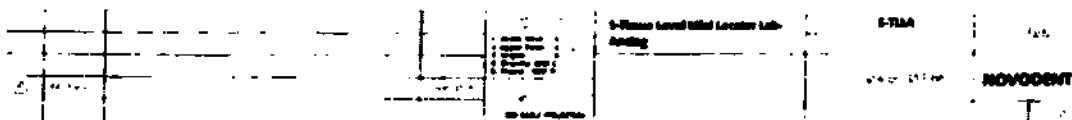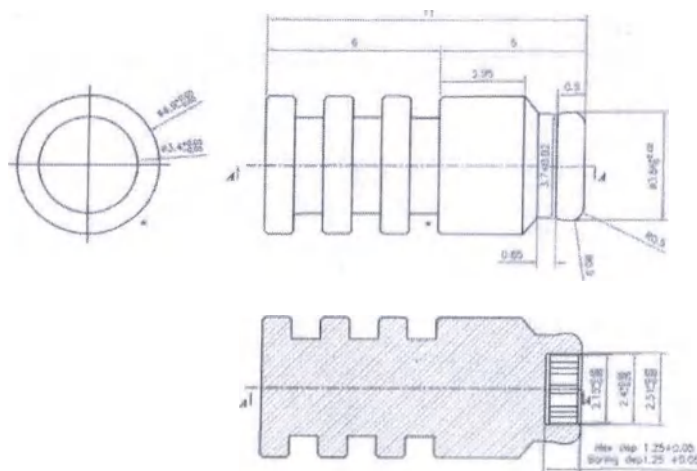Лабораторный аналог Tissue Level Mini Locator Lab-Analog (артикул S-TLLA)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

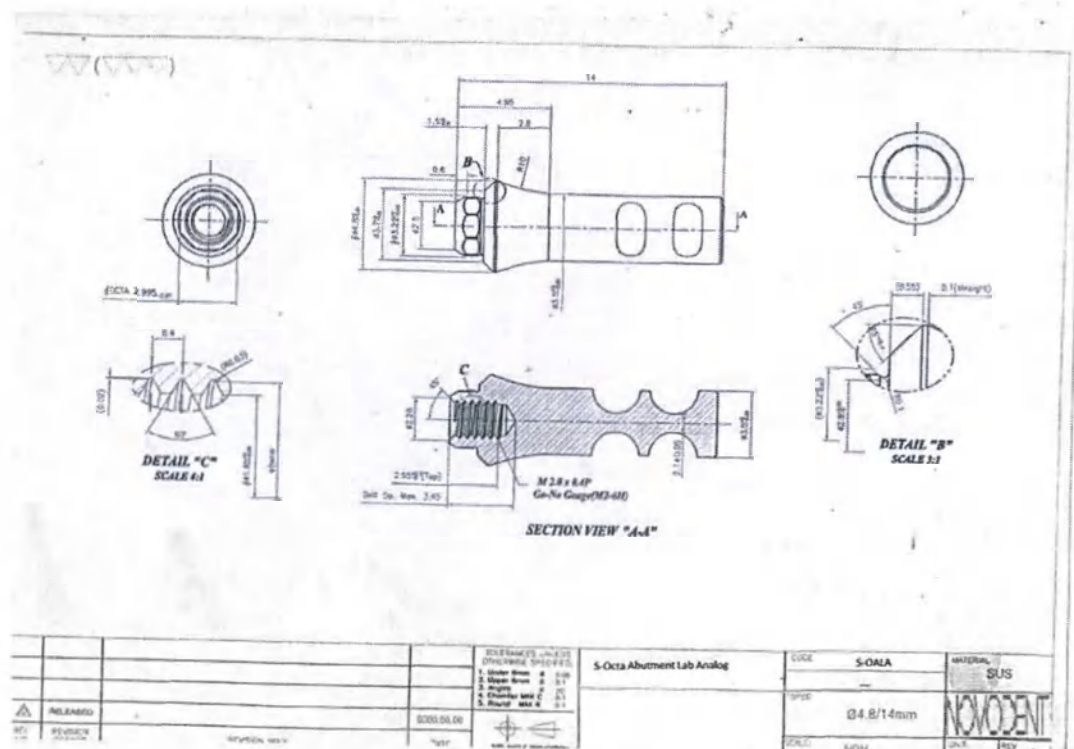Лабораторный аналог Octa Abutment Lab-Analog (артикул S-OALA)




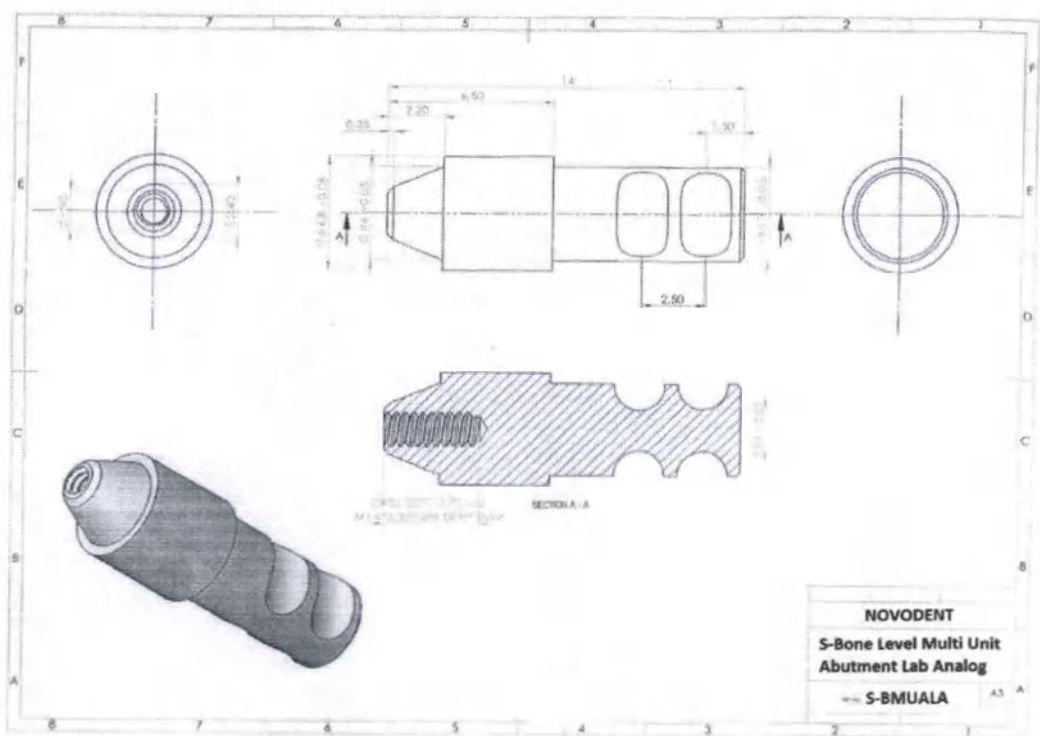Лабораторный аналог Bone Level Multi Unit Abutment Lab Analog (артикул S-BMUALA)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

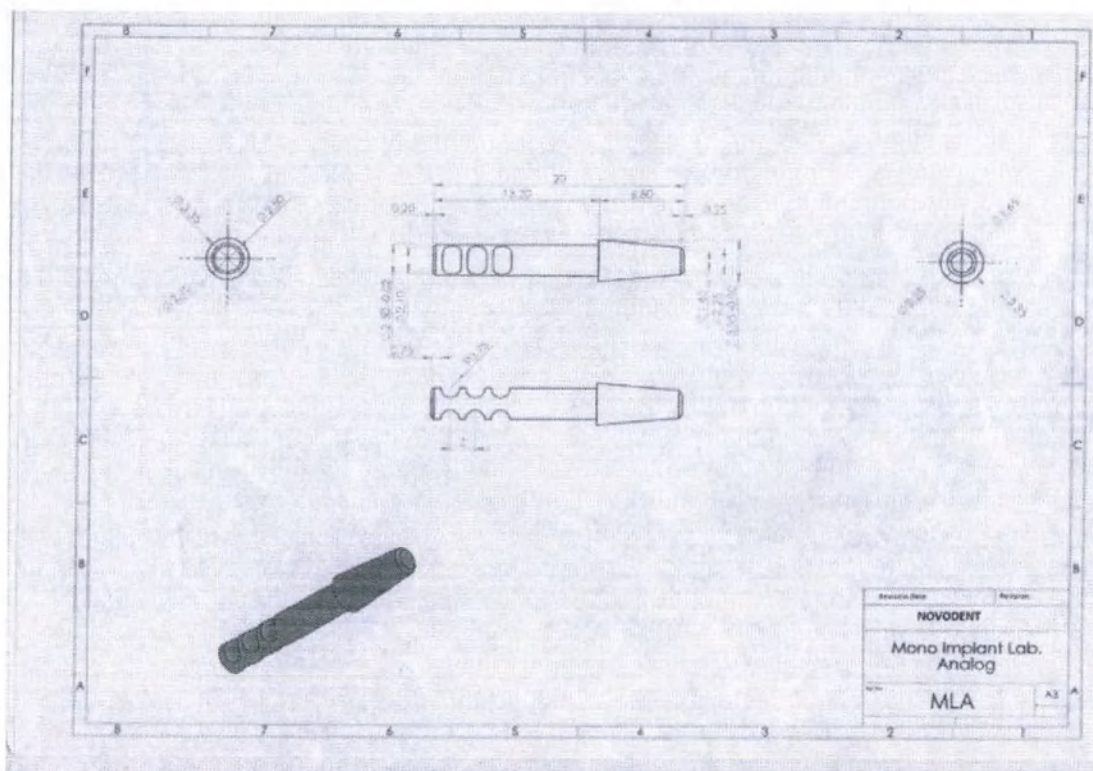Лабораторный аналог Mono Implant Lab Analog (артикул MLA)



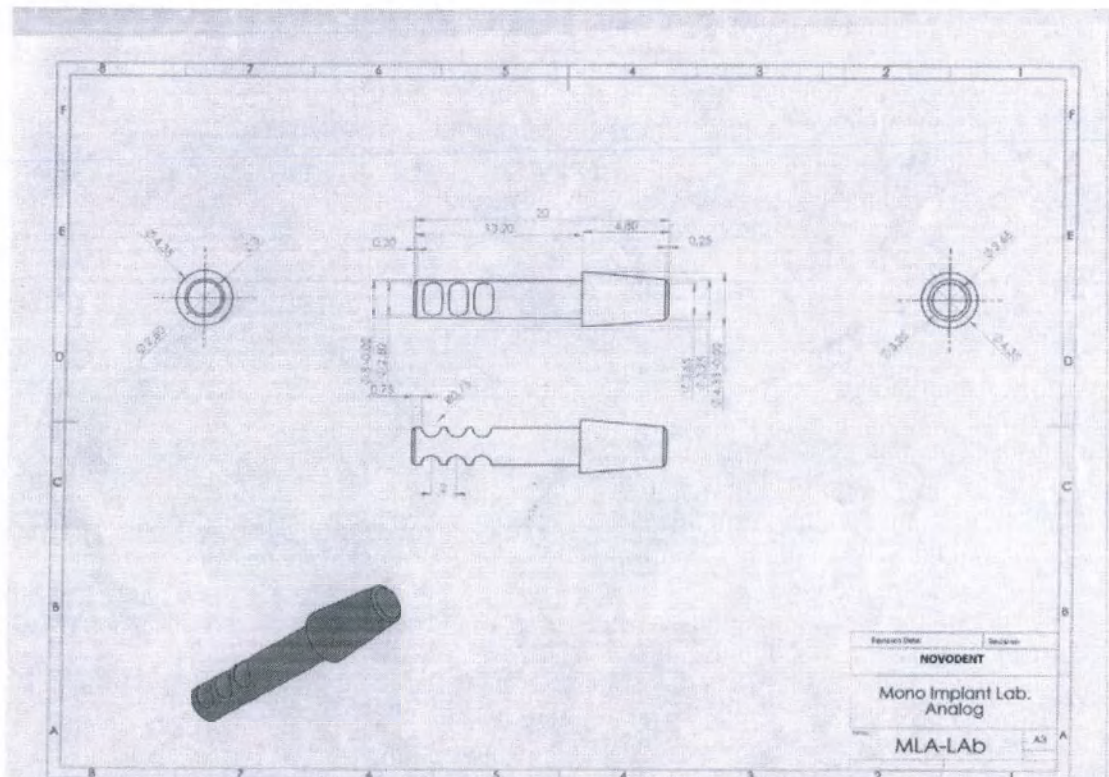Лабораторный аналог Mono Implant Lab Analog (артикул MLA-Lab)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 165 из 344

Пин аналога абатмента Tissue Level Shoulder Analog Pin (артыкула S-TShAPin)



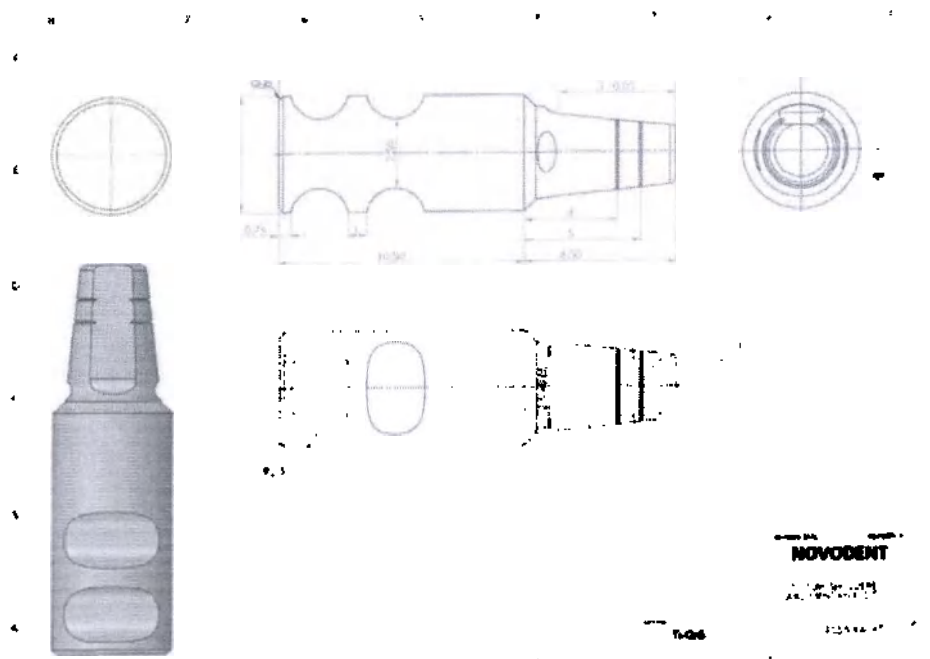
Лабораторный аналог i-system Shouldered Abutment Analog (артикул I-SSAA4065)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 166 из 344

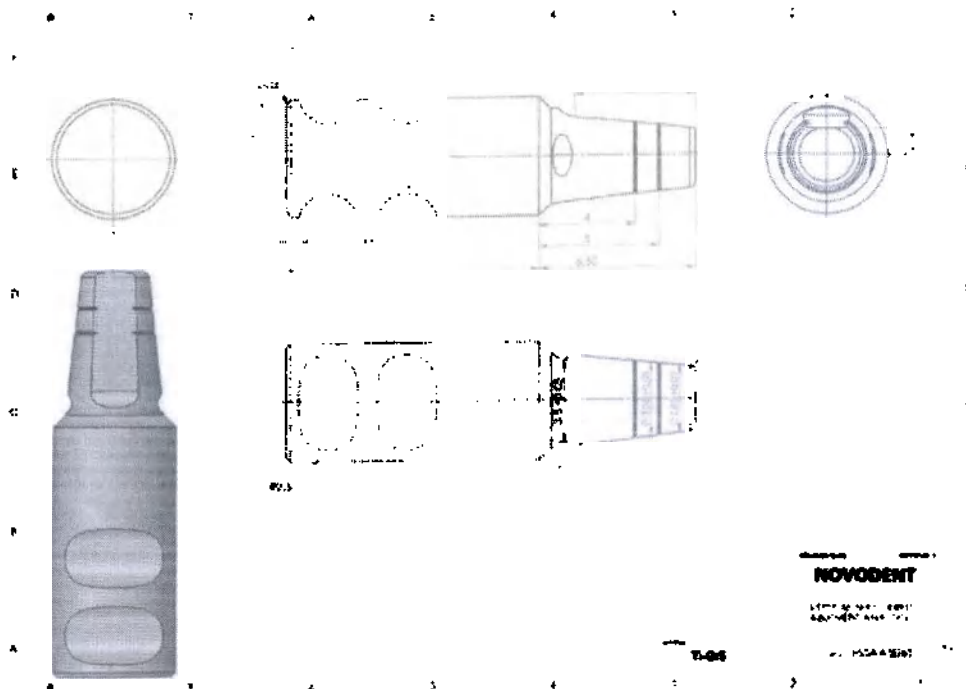Лабораторный аналог I-system Shouldered Abutment Analog (артикула I-SSAA5065)




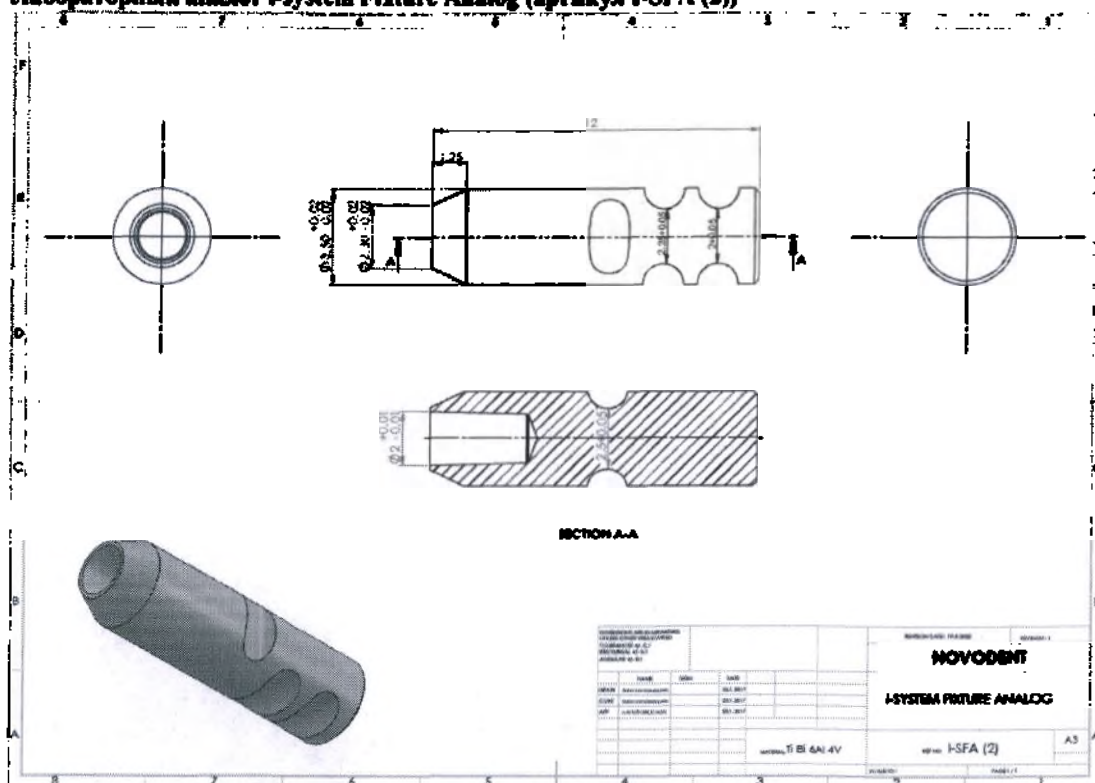Лабораторный аналог I-system Fixture Analog (артикула I-SFA (2))




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, I-system, в вариантах исполнения»

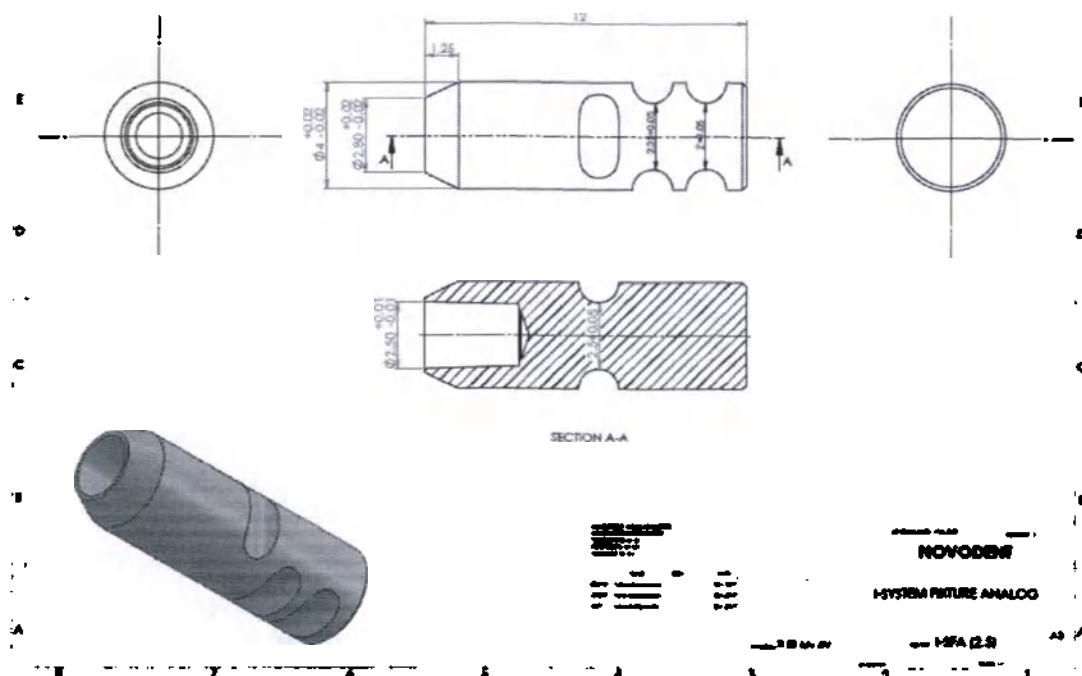Лабораторный аналог i-system Fixture Analog (артикул I-SFA (2.5))




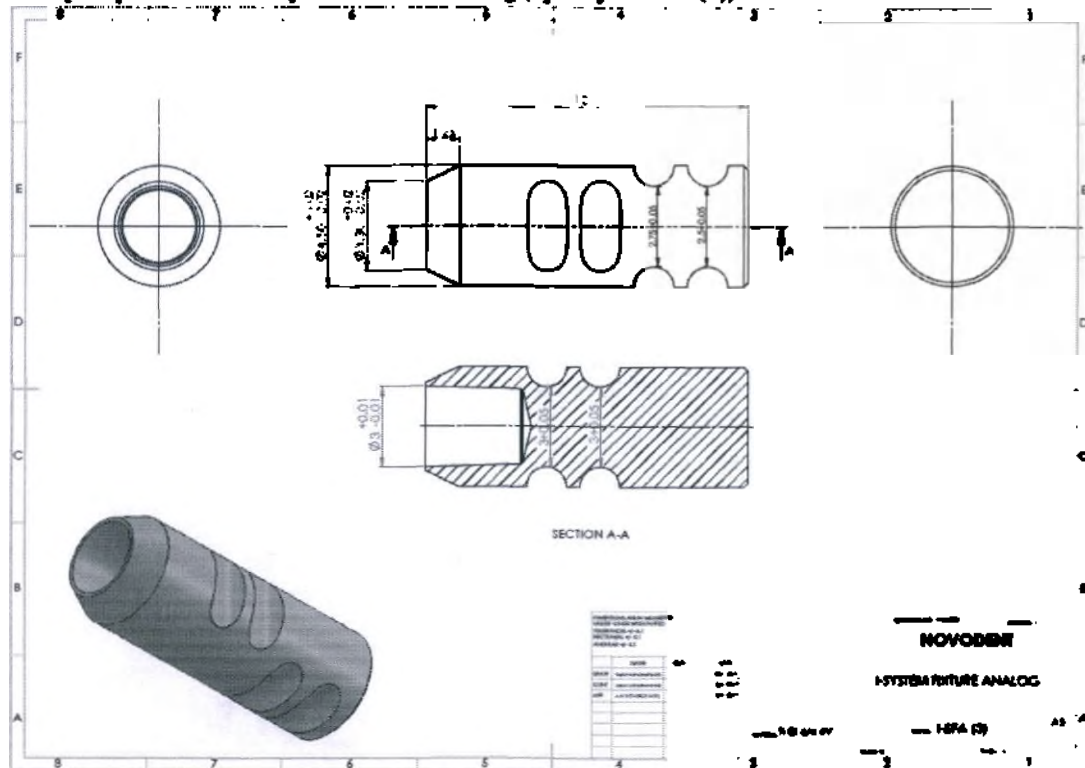Лабораторный аналог i-system Fixture Analog (артикул I-SFA (3))




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

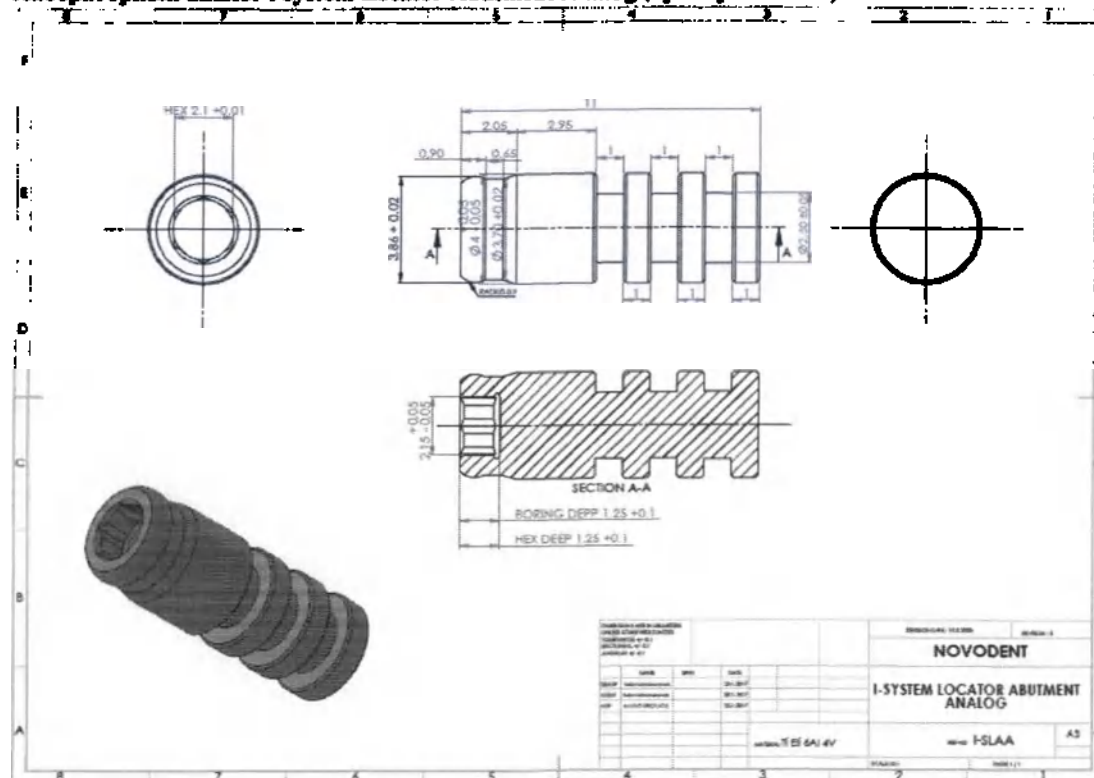Лабораторный аналог i-system Locator Abutment Analog (артикул I-SLAA)




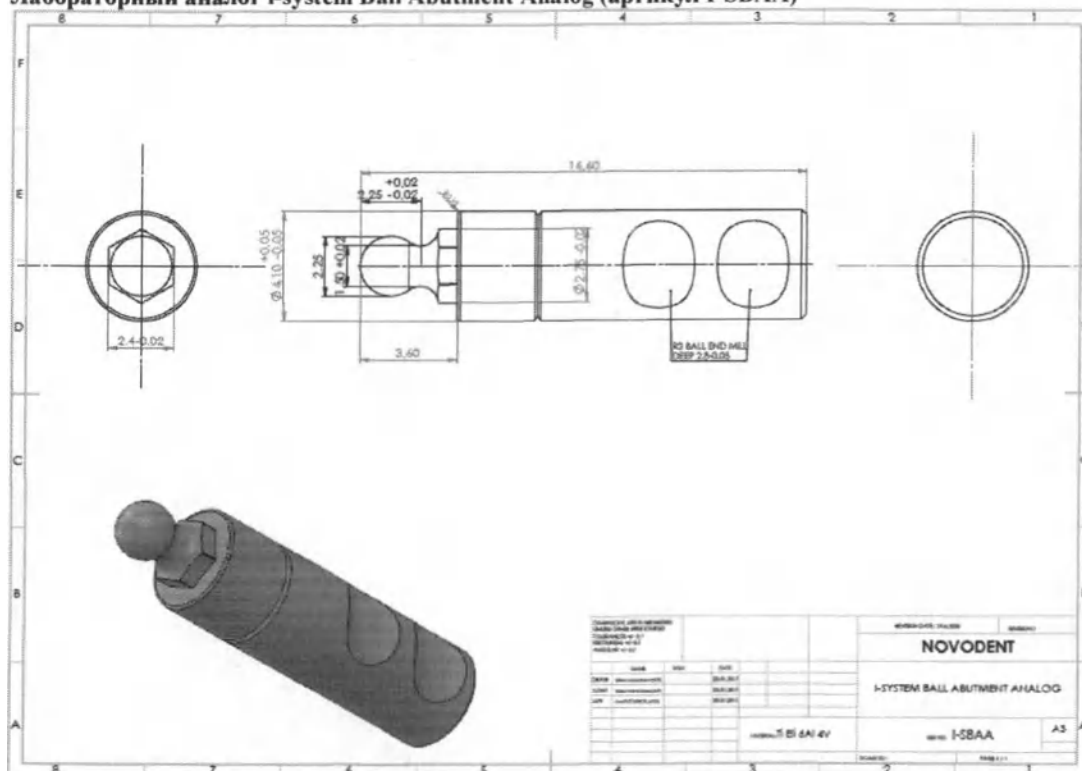Лабораторный аналог i-system Ball Abutment Analog (артикул I-SBAA)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

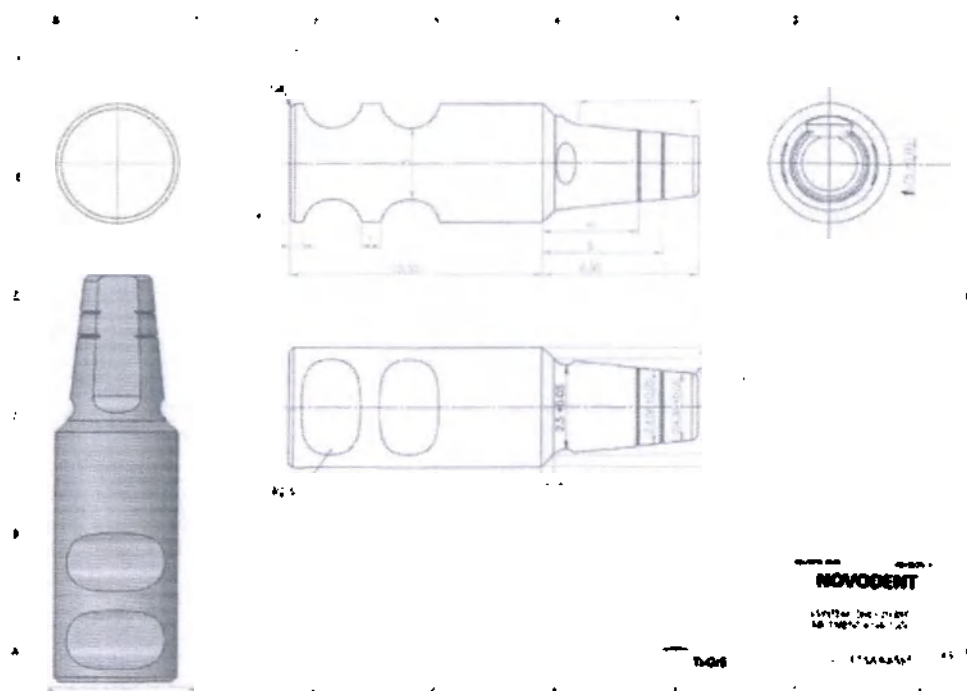Лабораторный аналог i-system Shouldered Abutment Analog (артикул I-SSAA6565)




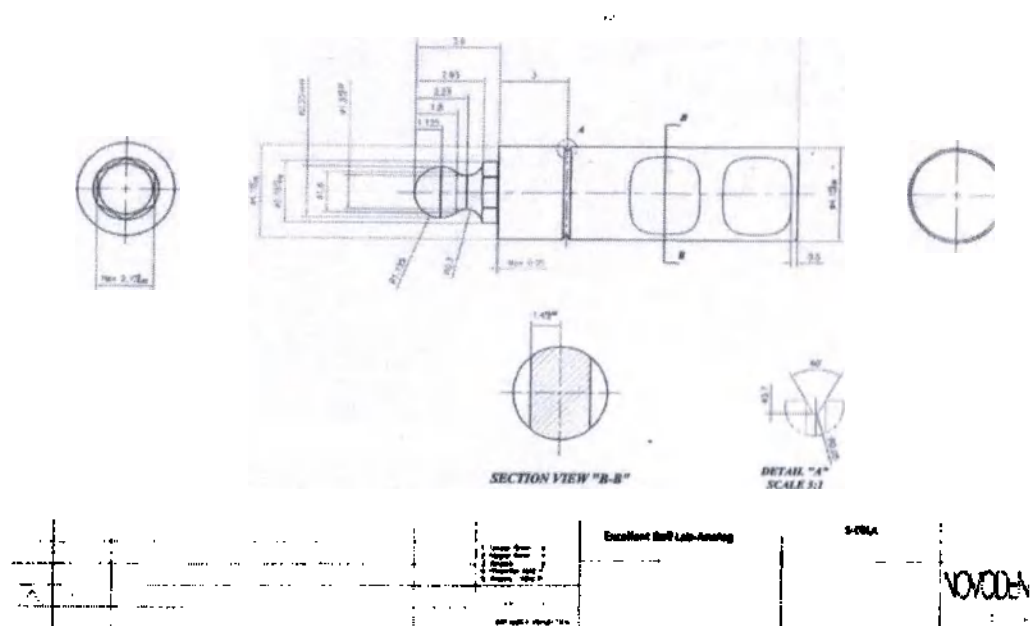Лабораторный аналог Excellent Ball Lab-Analog (артикул S-EBLA)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

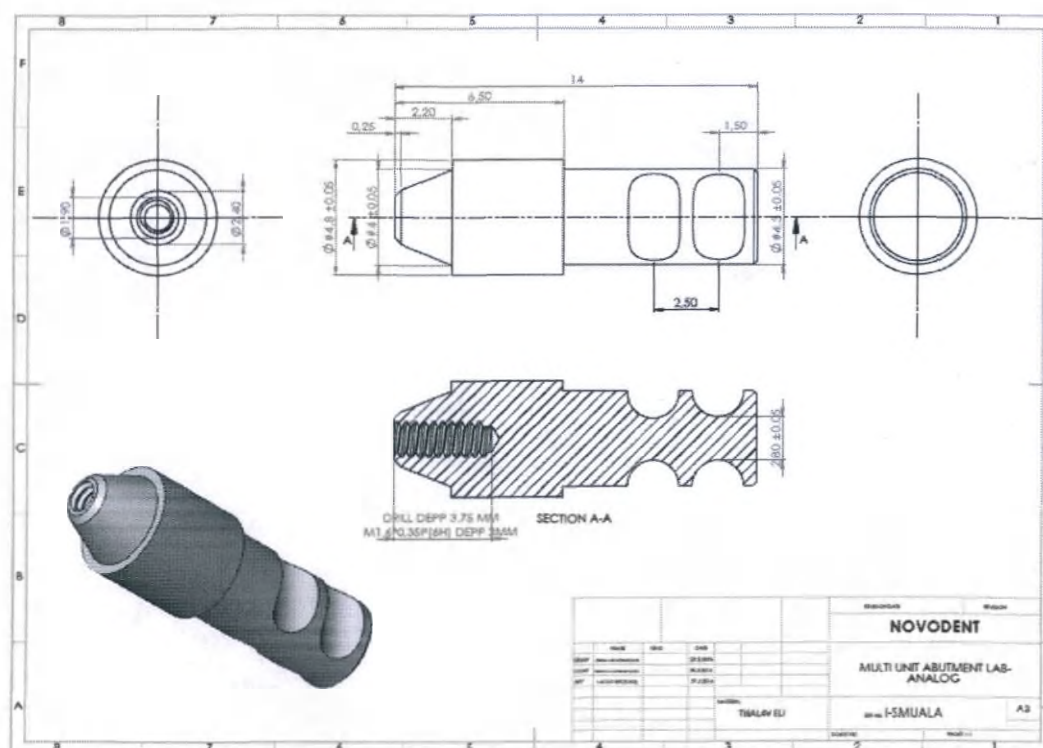Лабораторный аналог i-system Multi Unit Abutment Lab Analog (артикул I-SMUALA)




3. Трансферы:

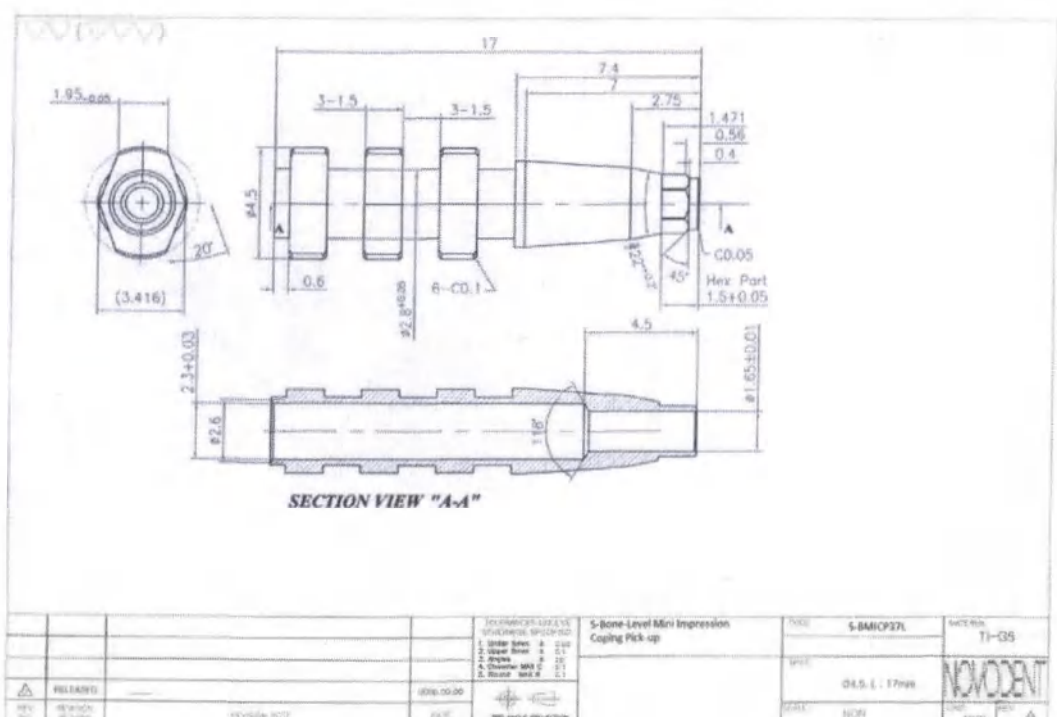Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Long (артикул S-BMICP37L)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

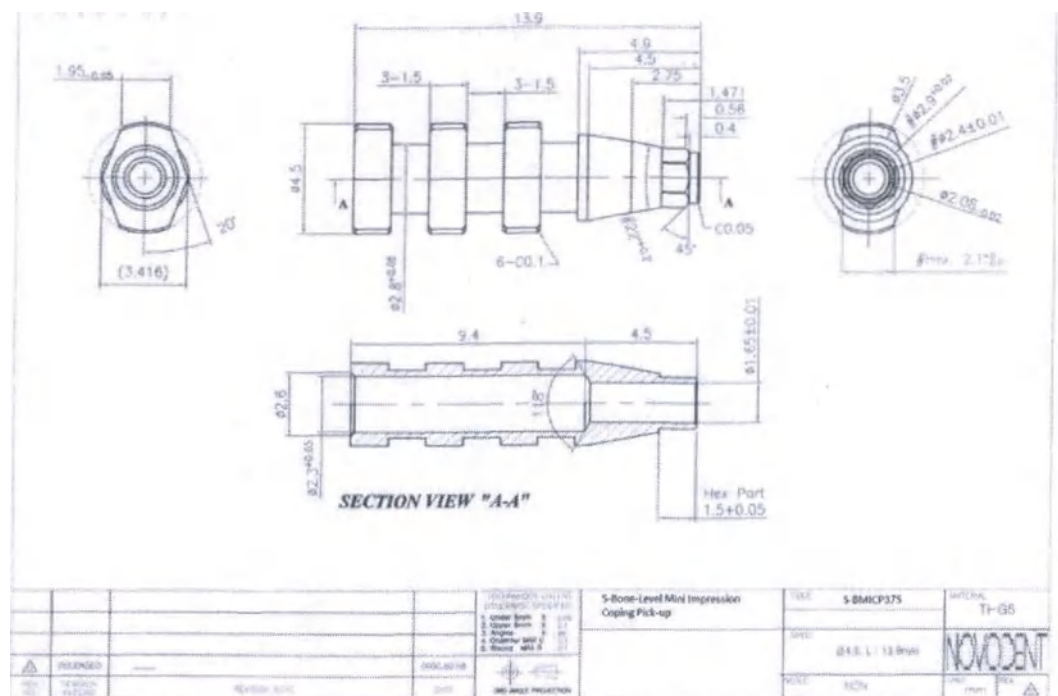Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Short (арткул S-BMCP37S)



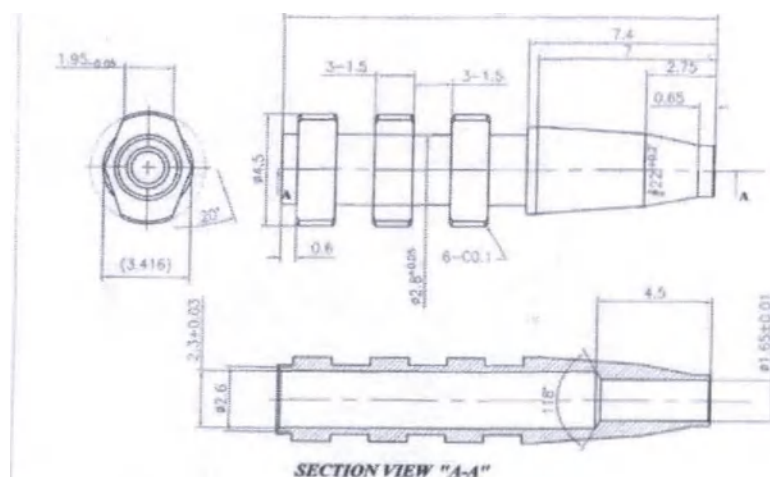
Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Non-Hex Long (арткул S-BMCPN37L)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 173 из 344

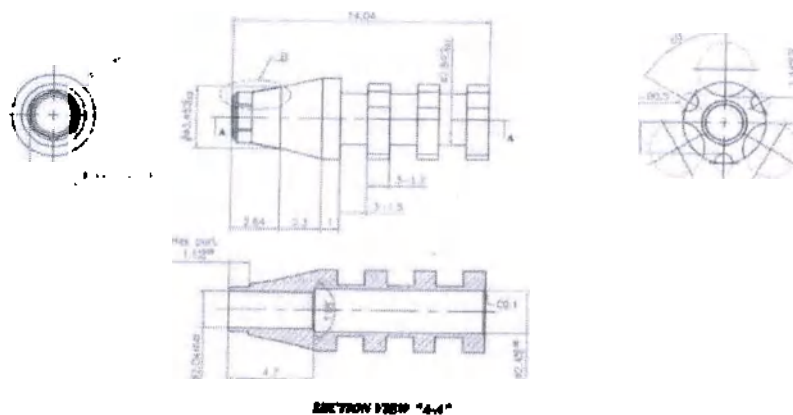Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Short (арткул S-BICP45S)



		S-Bone-Level Impression Coping Pick-up	S-BICP45S	TI 1.1.6 NOVODENT
--	--	---	-----------	----------------------

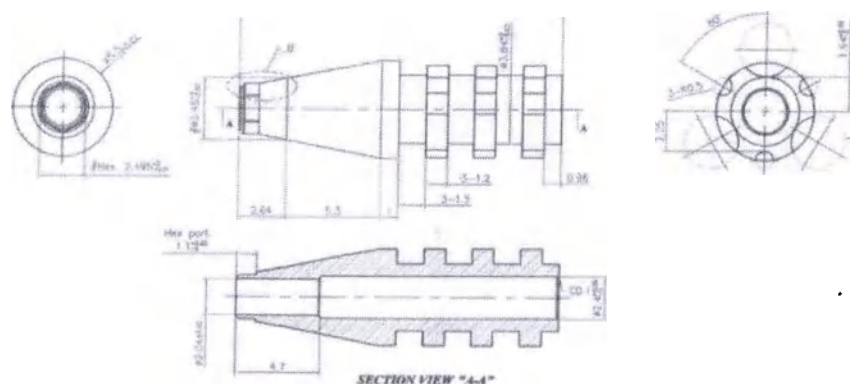
Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Long (арткул S-BICP55L)




		S-Bone-Level Impression Coping Pick-up	S-BICP55L	TI 1.1.6 NOVODENT
--	--	---	-----------	----------------------

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для детальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

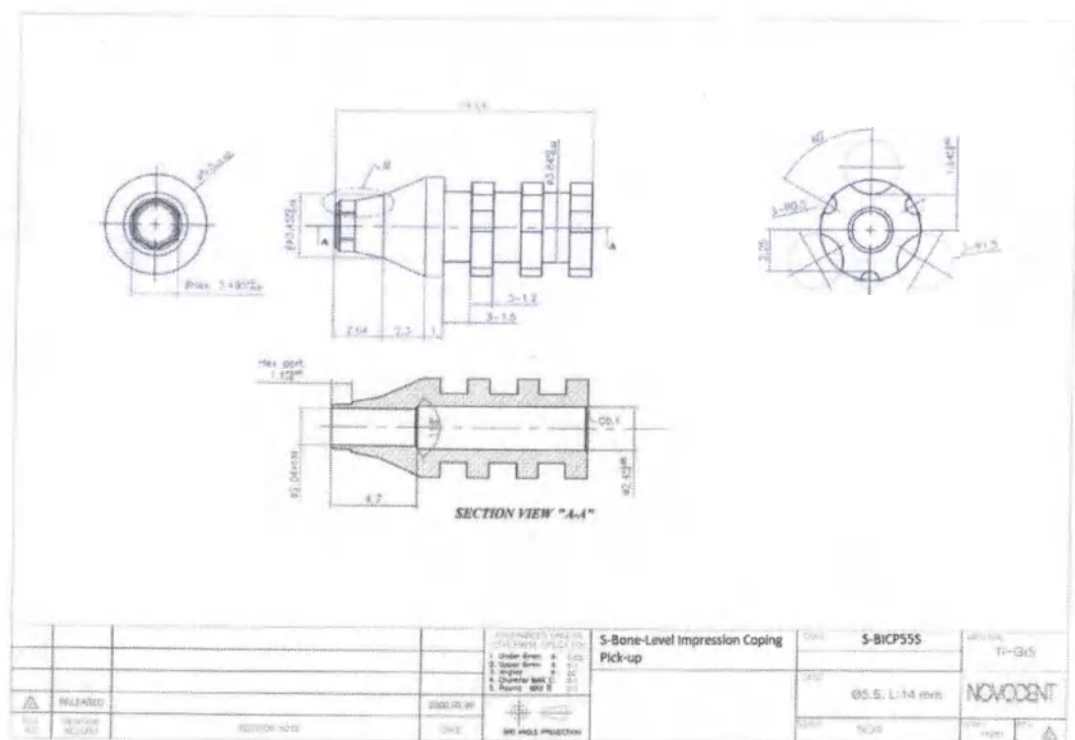Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Short (артикул S-BICP55S)




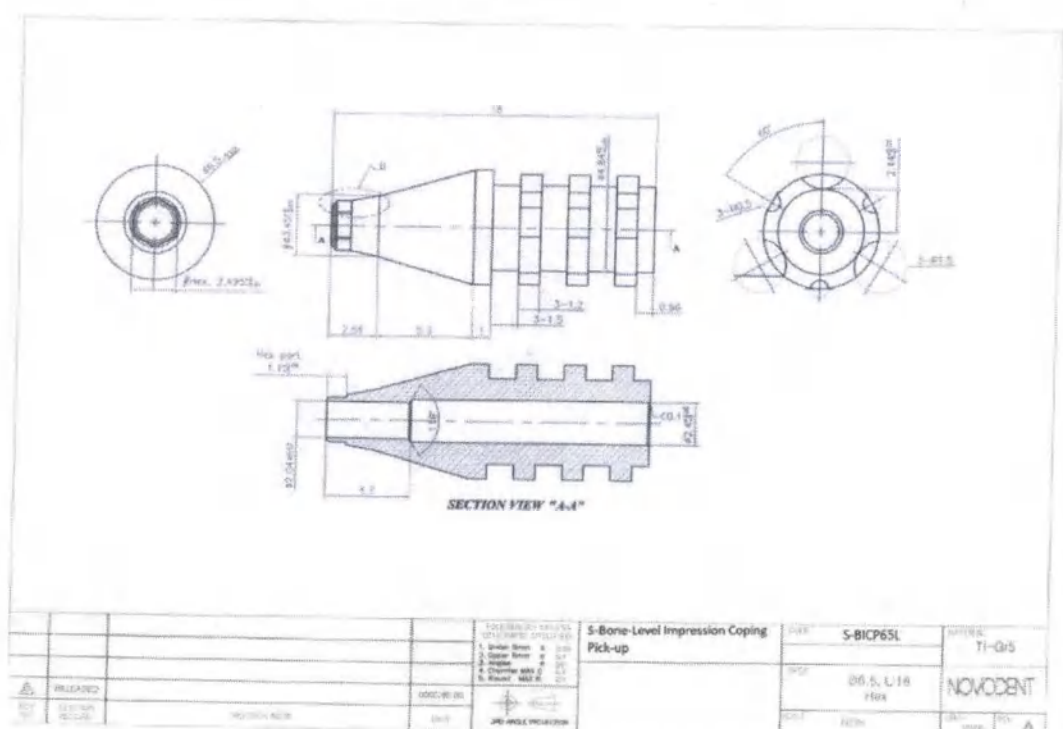Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Long (артикул S-BICP65L)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

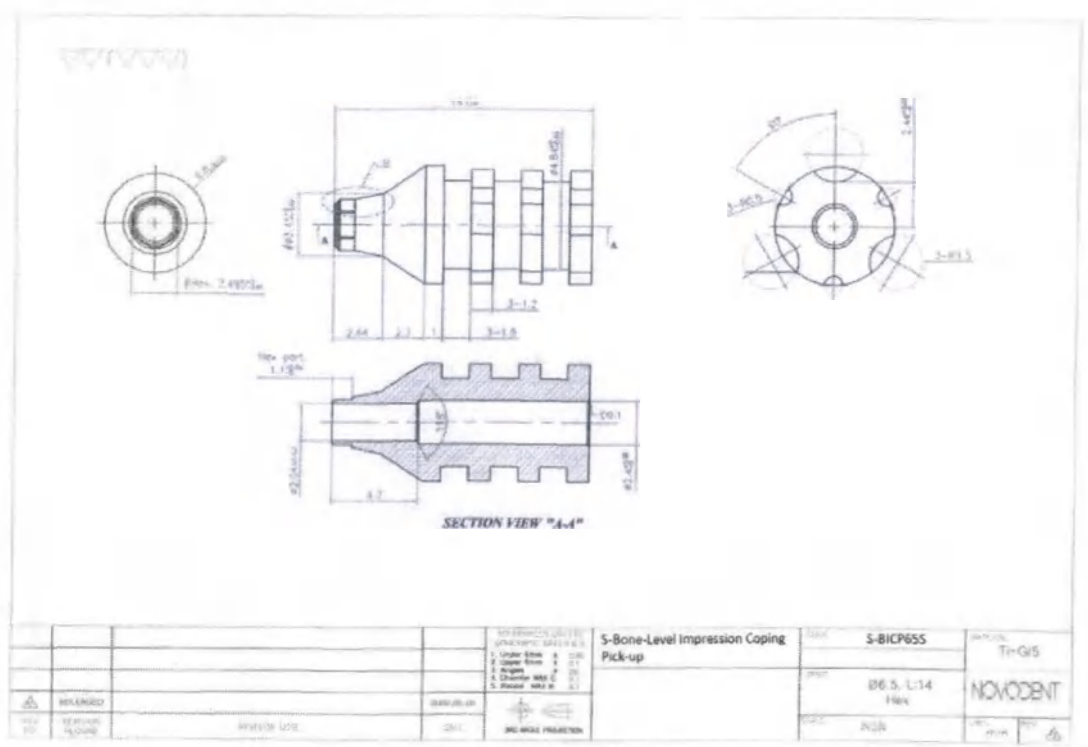Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Short (артикул S-BICP65S)




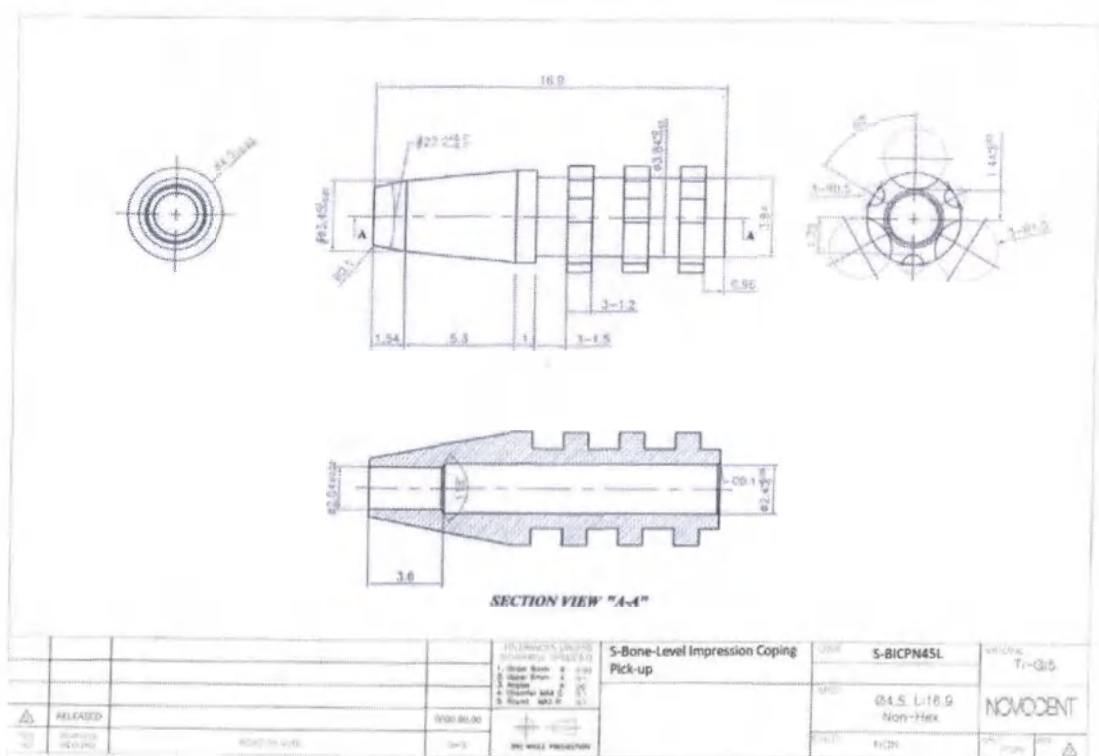Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Long (артикул S-BICPN45L)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

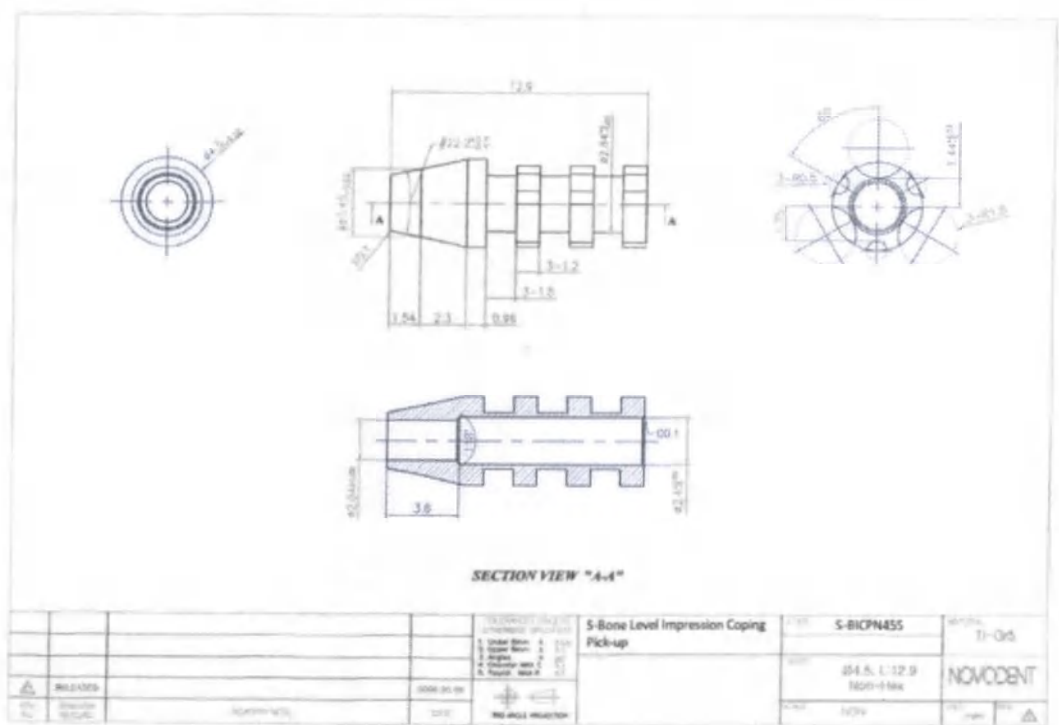Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Short (артикул S-BICPN45S)




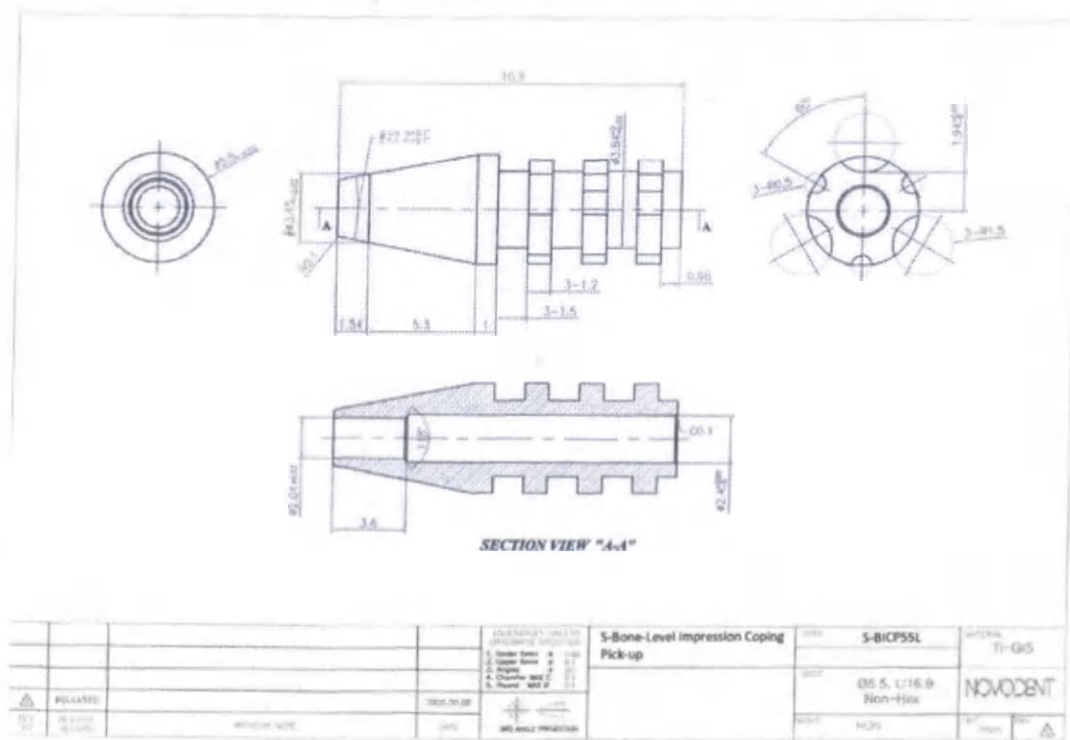Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Long (артикул S-BICPN55L)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

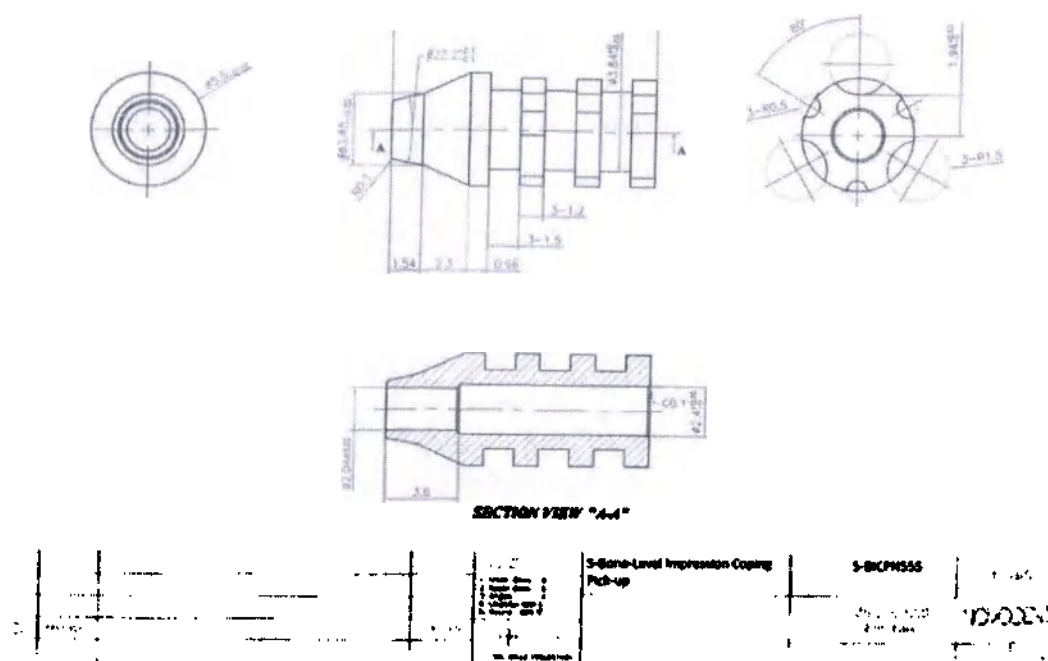Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Short (арткул S-BICPN55S)



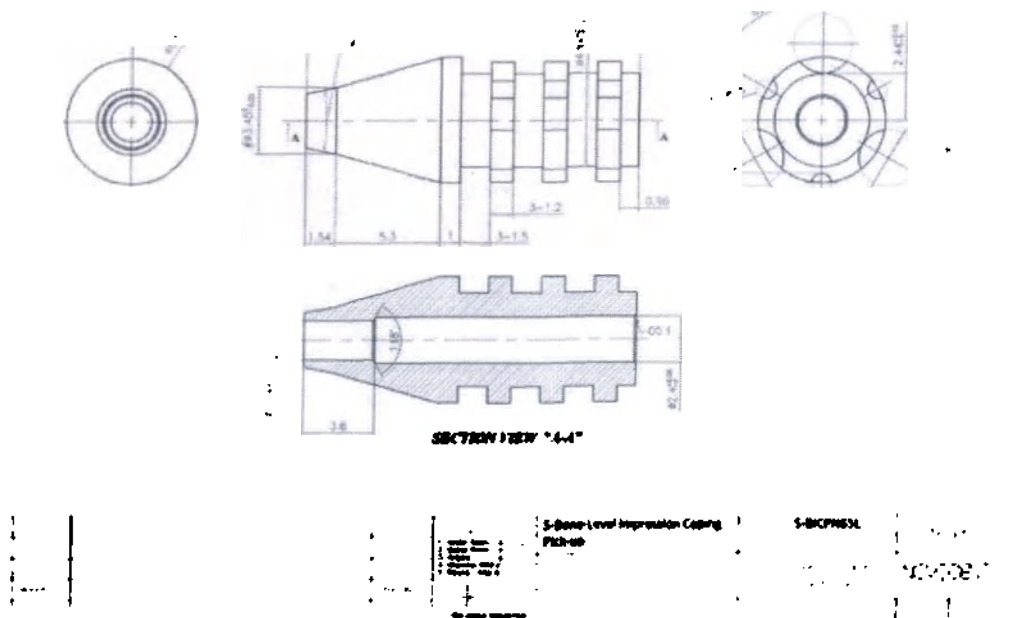Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Long (арткул S-BICPN65L)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, I-system, в вариантах исполнения»

Technical drawing of a 5-Bone Level Mini Impression Coping Transfer tool. The drawing includes a perspective view, a top view, a side view, and a cross-section labeled 'SECTION A-A'. Dimensions are provided in millimeters.

Top View:

- Overall diameter: 14.50
- Length: 7.50
- Inner diameter: 11.00
- Outer diameter: 14.50
- Section A-A is indicated.

Side View:

- Overall diameter: 14.50
- Length: 7.50
- Section A-A is indicated.

SECTION A-A:

- Overall diameter: 14.50
- Length: 7.50
- Section A-A is indicated.

Bottom View:

- Overall diameter: 14.50
- Length: 7.50
- Section A-A is indicated.

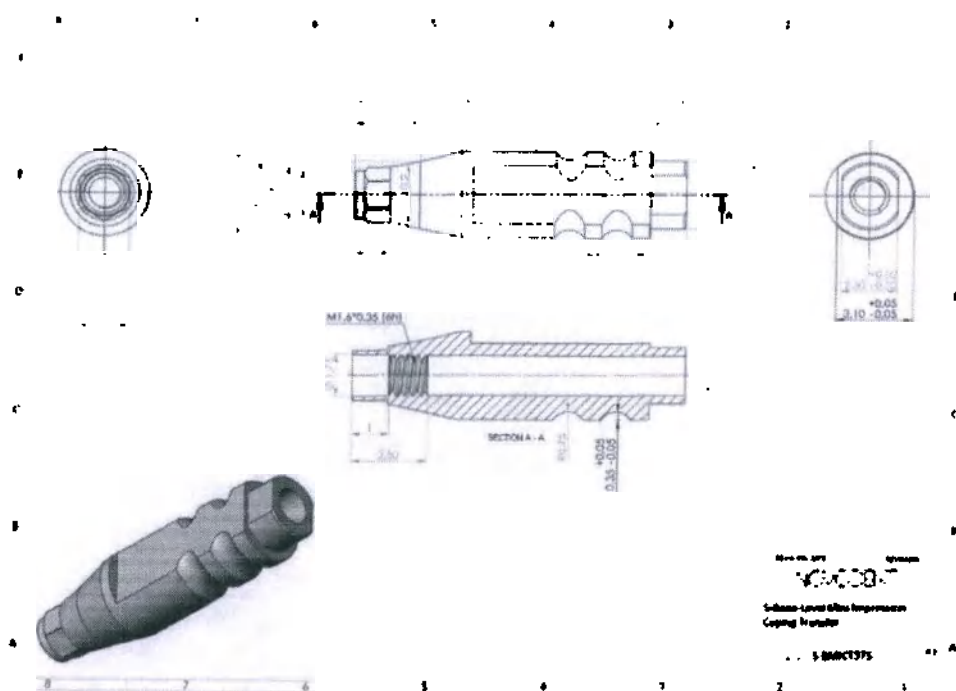
Tool Label:

5-Bone Level Mini Impression Coping Transfer


S-8MCT37L

Страница 179 из 344

Transcoper Bone Level Mini Impression Coping Transfer Short (approx. S-BM1CT37S)



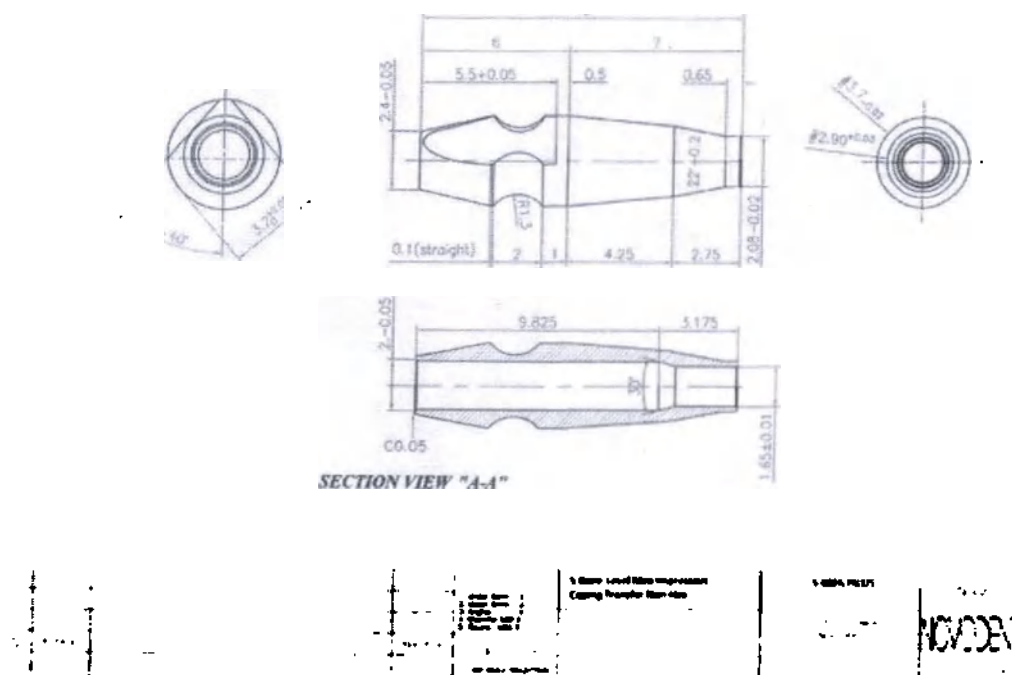
Transcoper Bone Level Mini Impression Coping Transfer Non-hex Long (apartuyn S-BMICTN37L)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 180 из 344

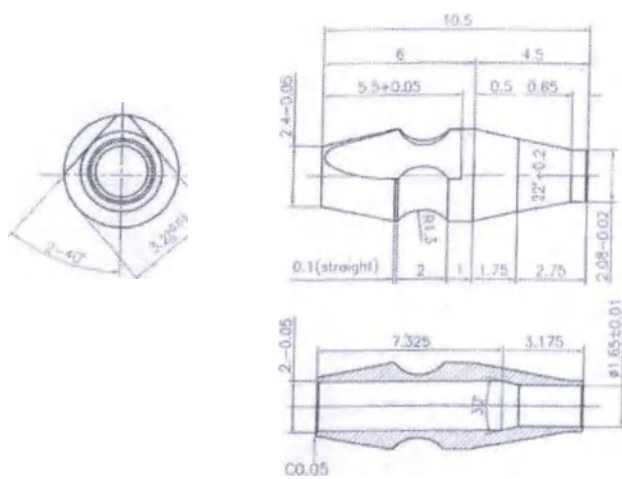
Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BMICTN37S)



SECTION VIEW "A-A"



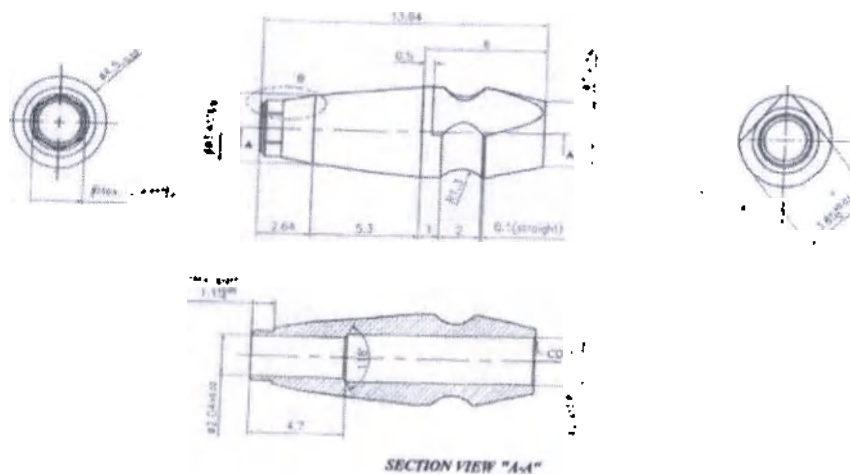Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT45L)




SECTION VIEW "A-A"




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для декартальной имплантации: имплантат, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

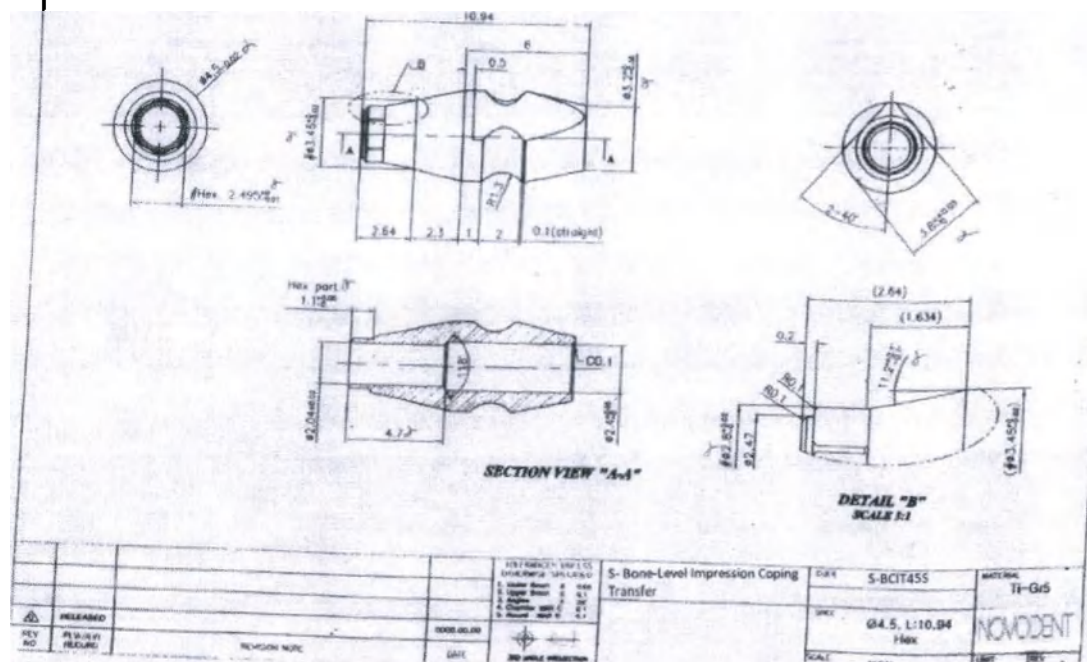Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT45S)




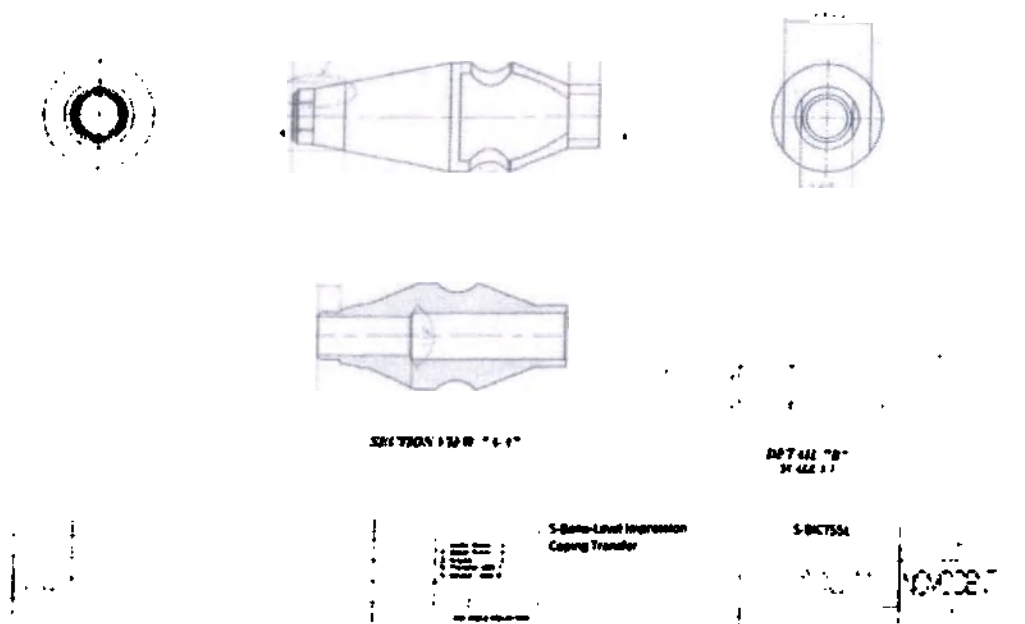Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT55L)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

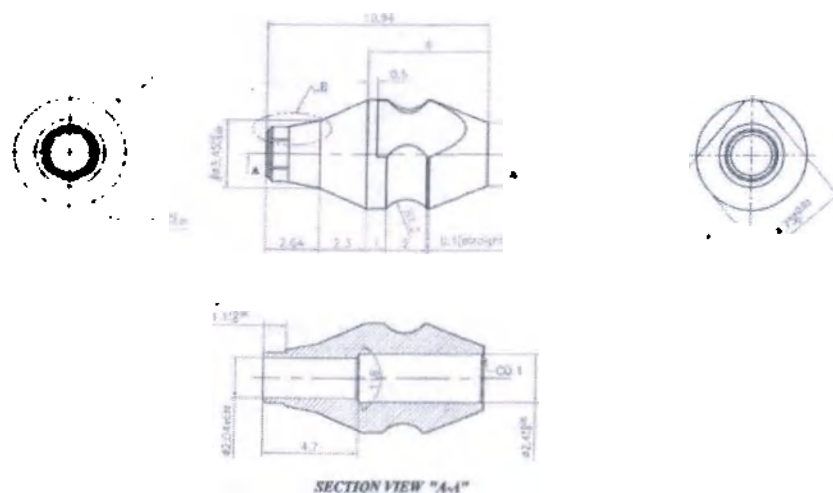Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT55S)



			S-Bone-Level Impression Coping Transfer	S-BICT55S
--	--	--	---	-----------

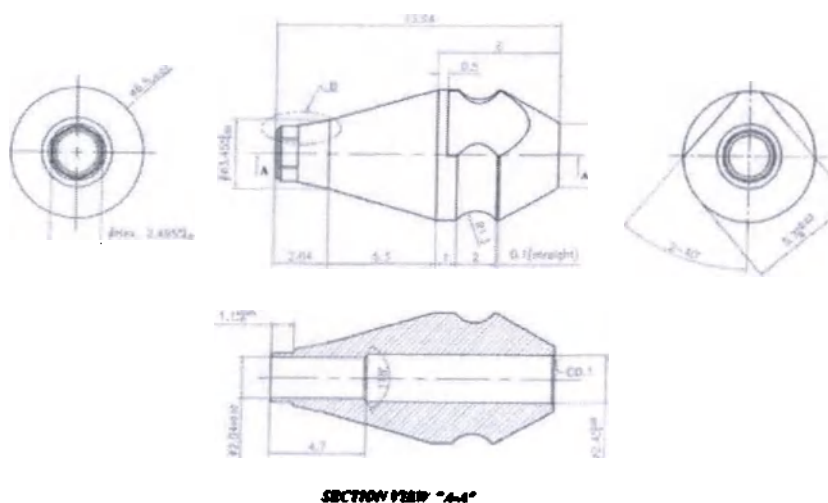
Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT65L)




			S-Bone-Level Impression Coping Transfer	S-BICT65L
--	--	--	---	-----------

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

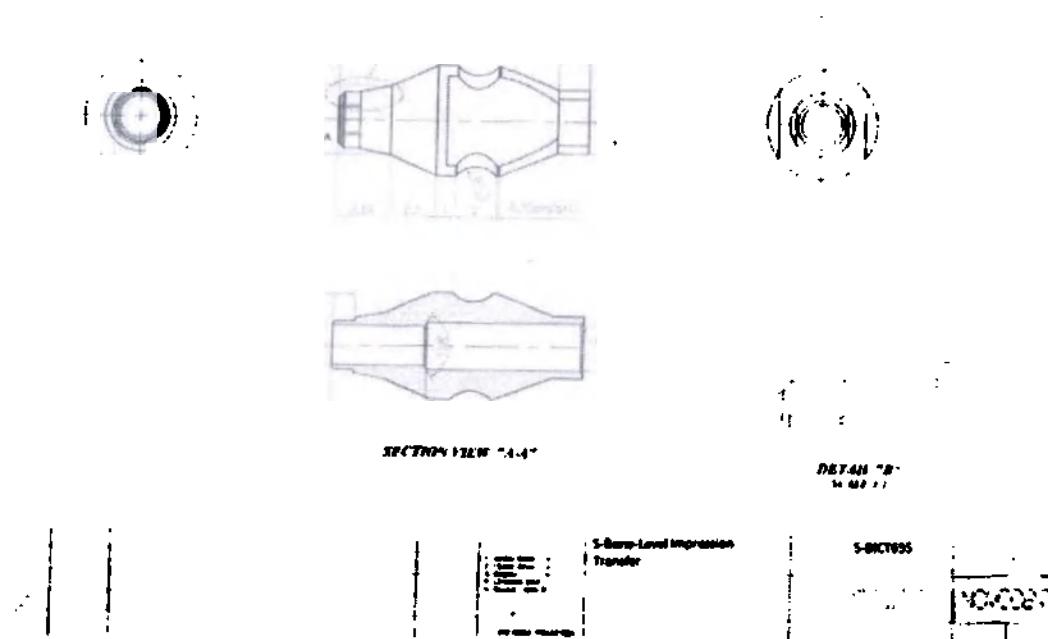Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT65S)



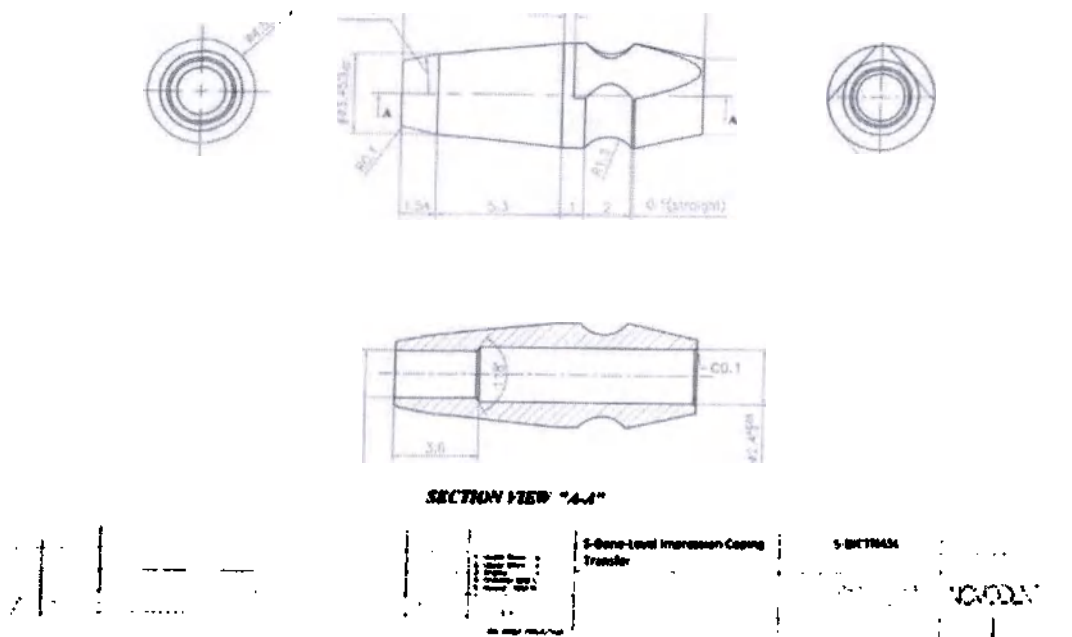Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN45L)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 184 из 344


SECTION VIEW "A-A"

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHECKED	DATE	BY	DESCRIPTION
1	ASSEMBLED	2000.05.10					
2	REVISION	2000.05.10					


NOVOCENT

Страница 185 из 344

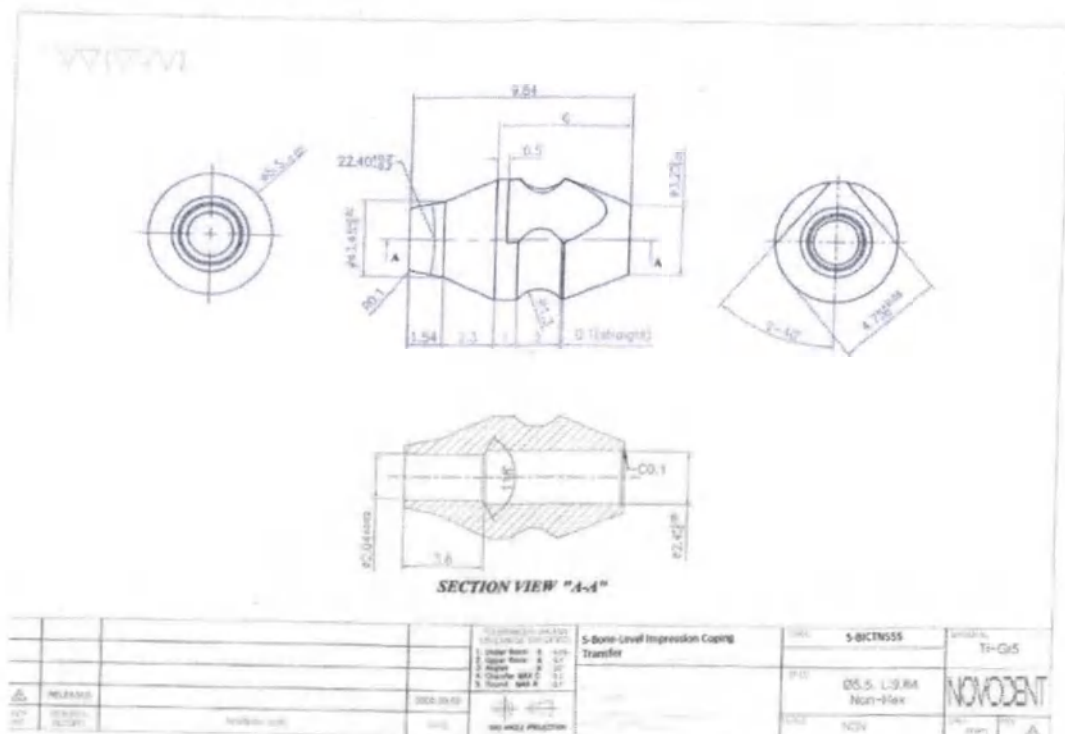Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN55S)



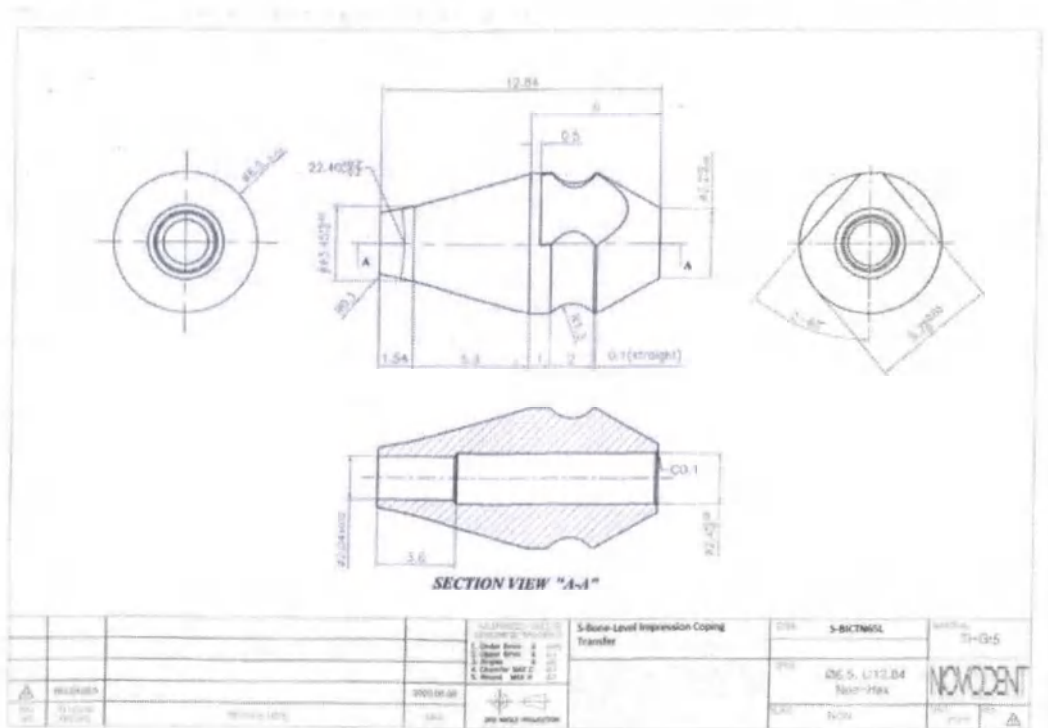Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN65L)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

[illegible]

Technical drawing of the S-Bone Level Mini Impression Coping Transfer Short. The drawing includes a 3D perspective view of the tool, a top view, a side view, and a cross-section labeled 'SECTION A-A'. Dimensions are provided in millimeters.

Top View:

- Overall diameter: 16.76
- Inner hole diameter: 12.7
- Outer hole diameter: 12.7
- Inner hole depth: 2.54
- Outer hole depth: 2.54
- Inner hole tolerance: $+0.03$ / -0.03
- Outer hole tolerance: $+0.03$ / -0.03

Side View:

- Overall length: 16.76
- Inner hole diameter: 12.7
- Outer hole diameter: 12.7
- Inner hole depth: 2.54
- Outer hole depth: 2.54
- Inner hole tolerance: $+0.03$ / -0.03
- Outer hole tolerance: $+0.03$ / -0.03

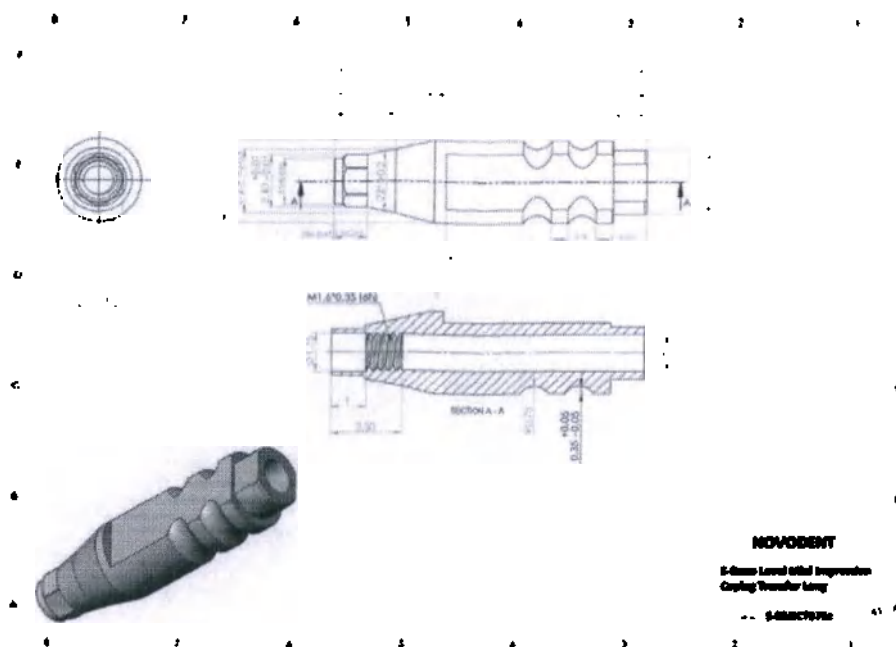
Cross-section A-A:

- Thread: M1.6x0.35 (6H)
- Length: 3.30
- Inner hole diameter: 12.7
- Outer hole diameter: 12.7
- Inner hole depth: 2.54
- Outer hole depth: 2.54
- Inner hole tolerance: $+0.03$ / -0.03
- Outer hole tolerance: $+0.03$ / -0.03


NOVODENT
S-Bone Level Mini Impression
Coping Transfer Short
S-8MICT37Le

Страница 187 из 344

Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Short (арткул S-BMICT37Sc)




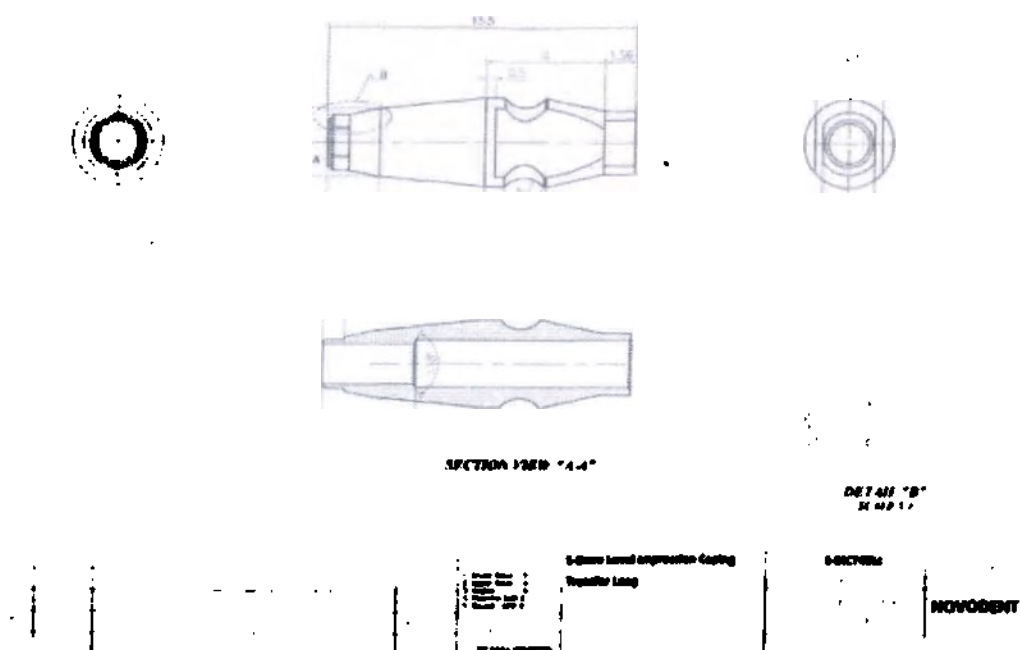Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (арткул S-BICT45Le)




Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (арткул S-BICT45Sc)

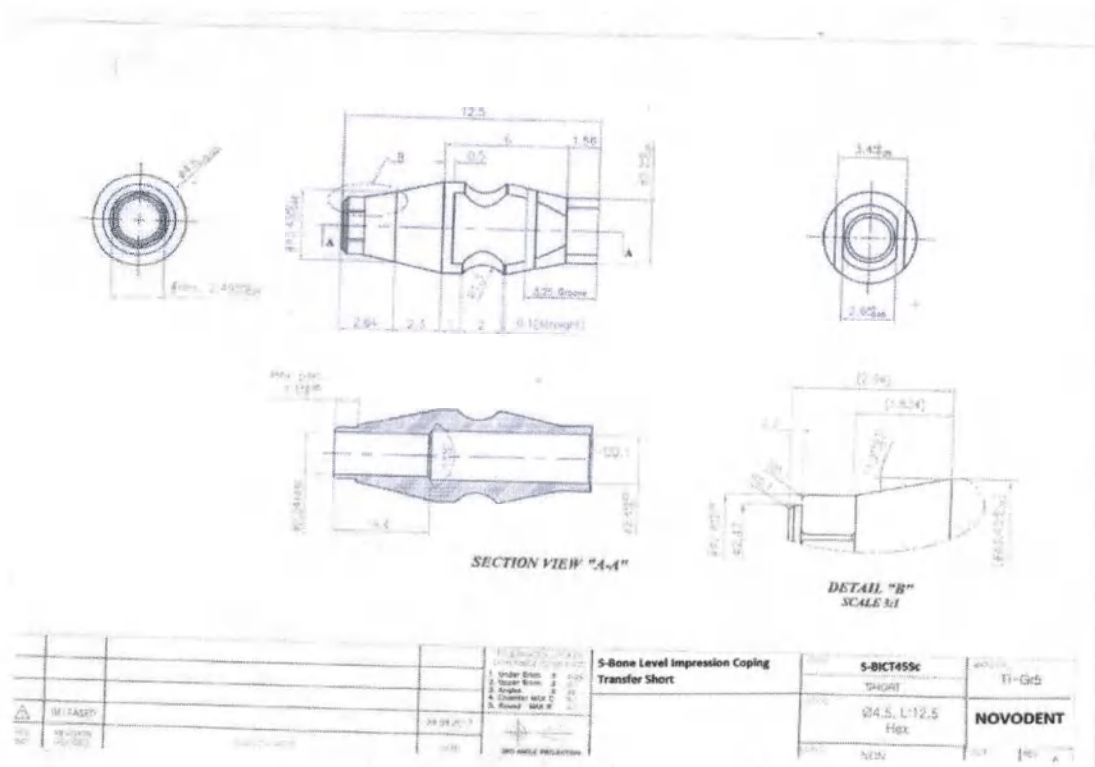Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




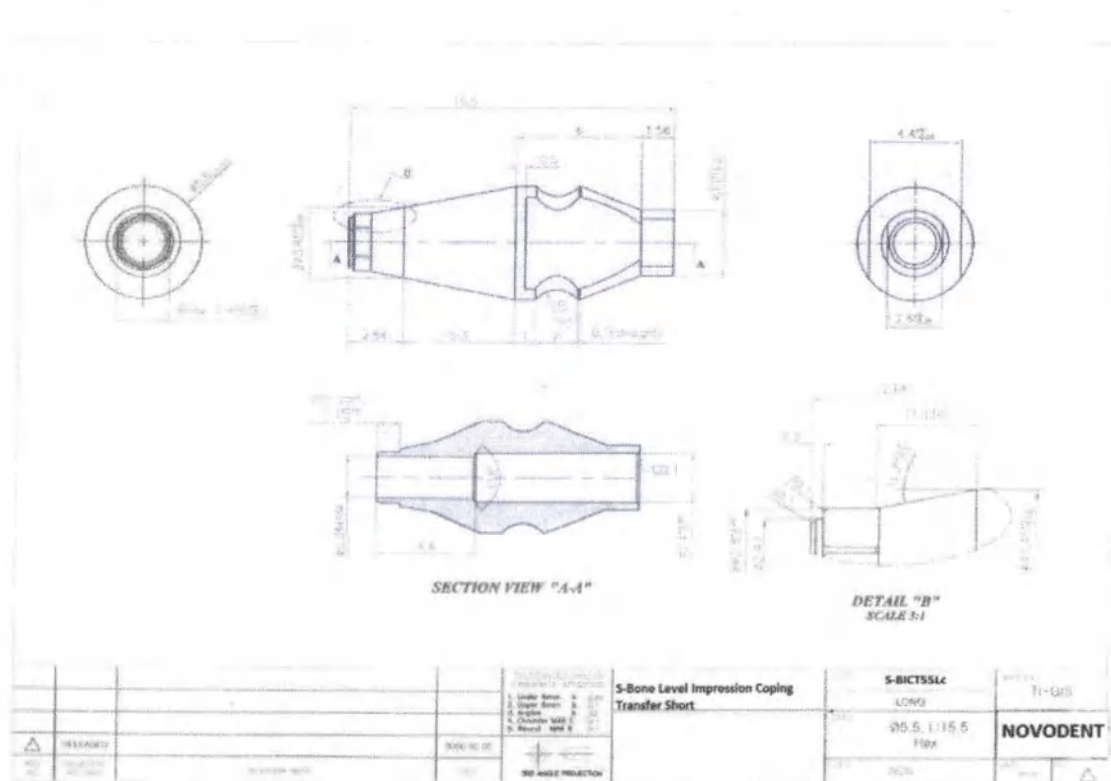Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT55Lc)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

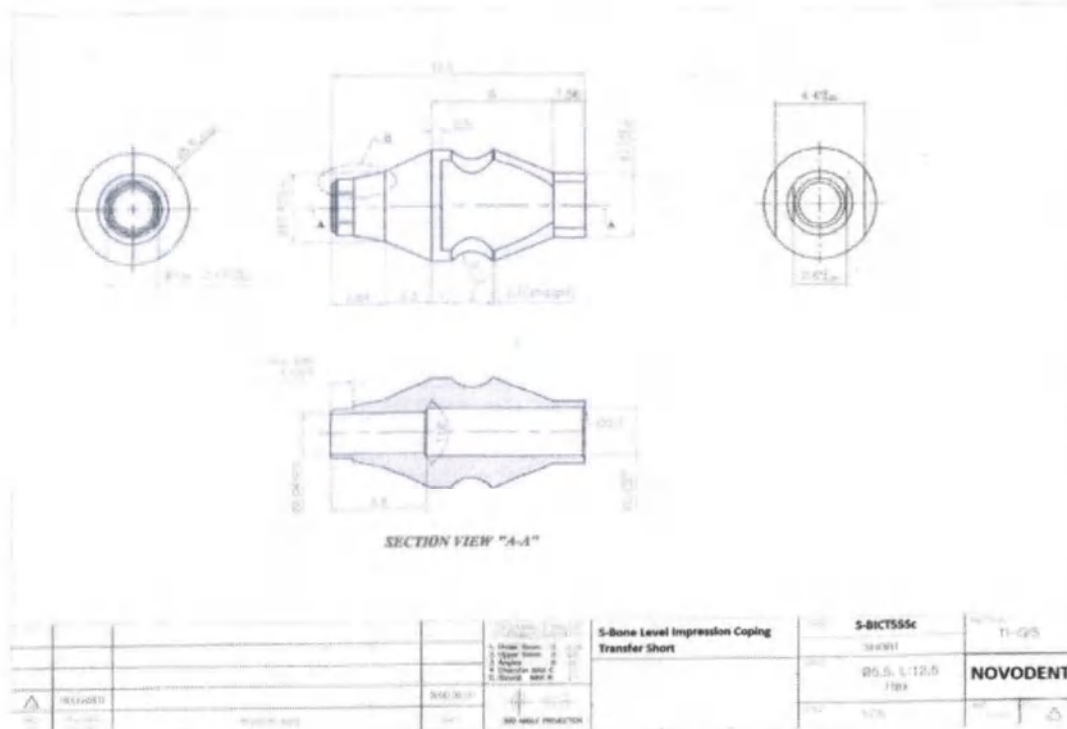Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT55Sc)




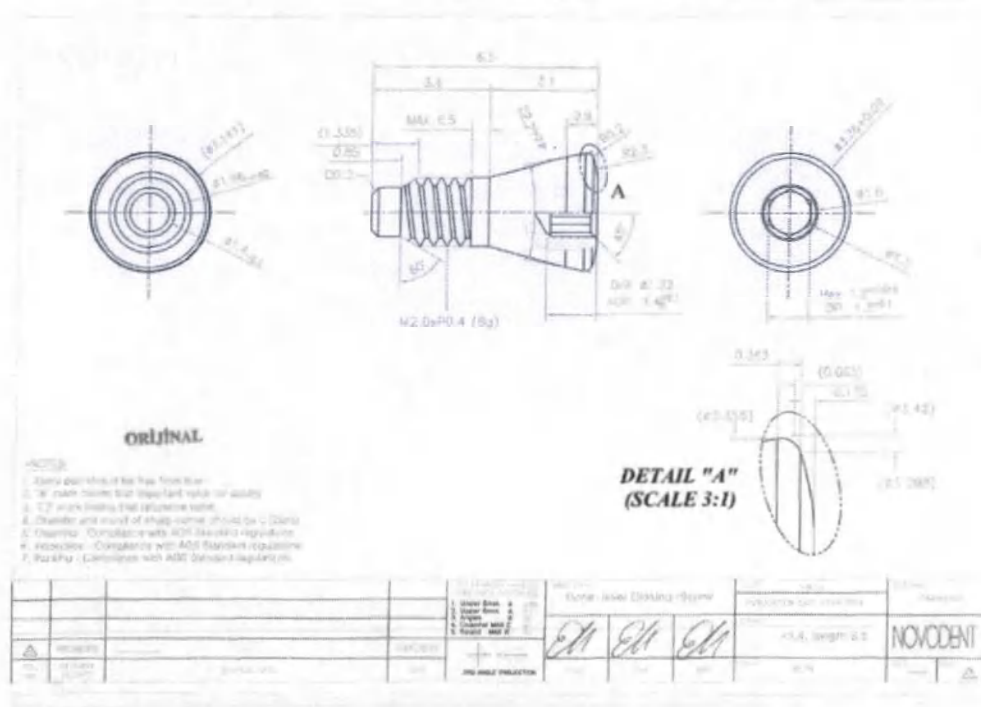Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT65Le)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

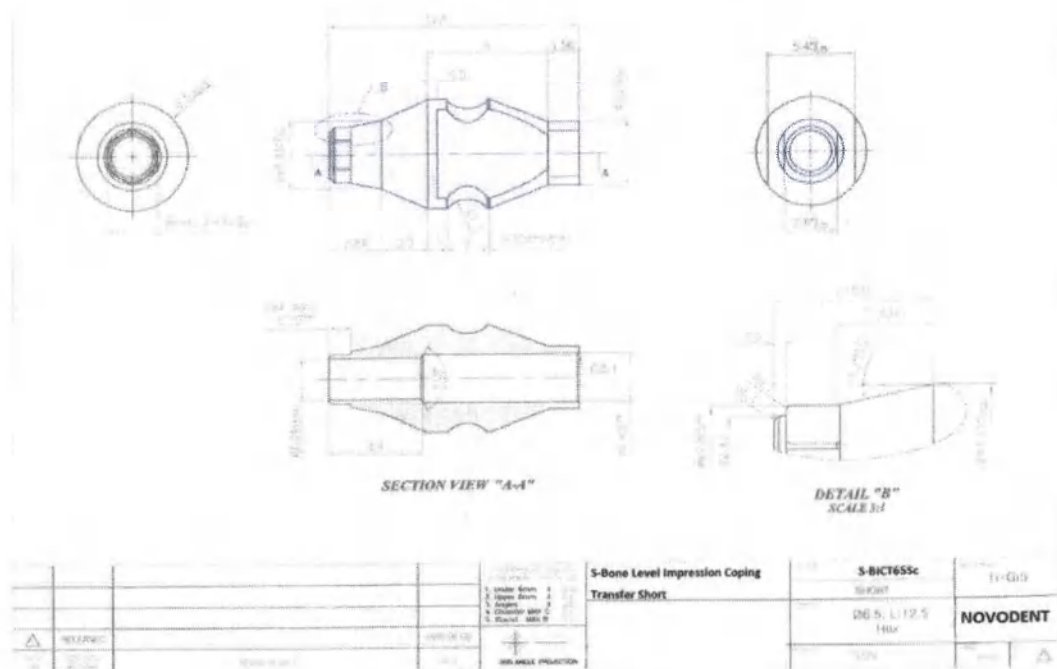Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT65Sc)




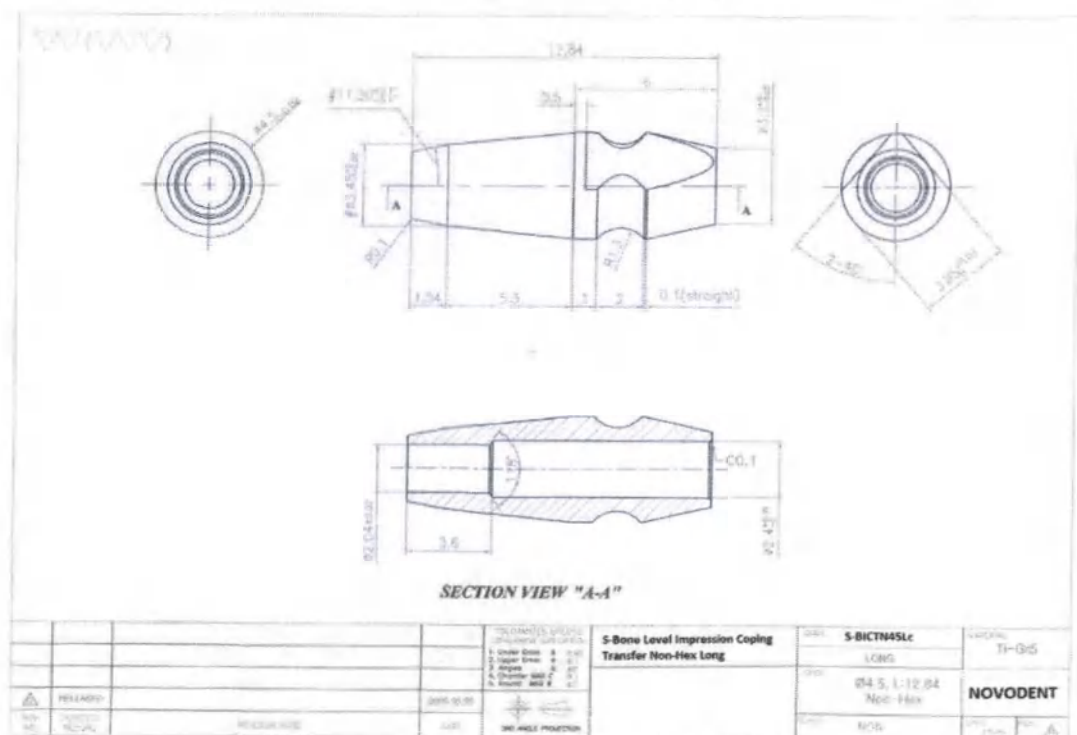Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN45Lc)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

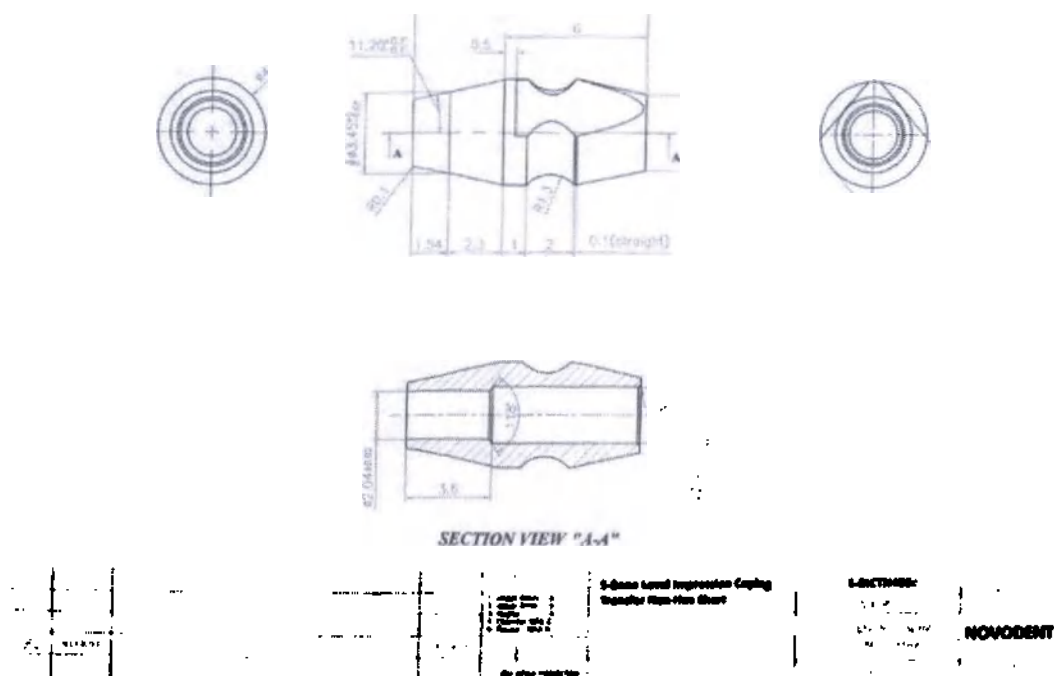Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN45Sc)




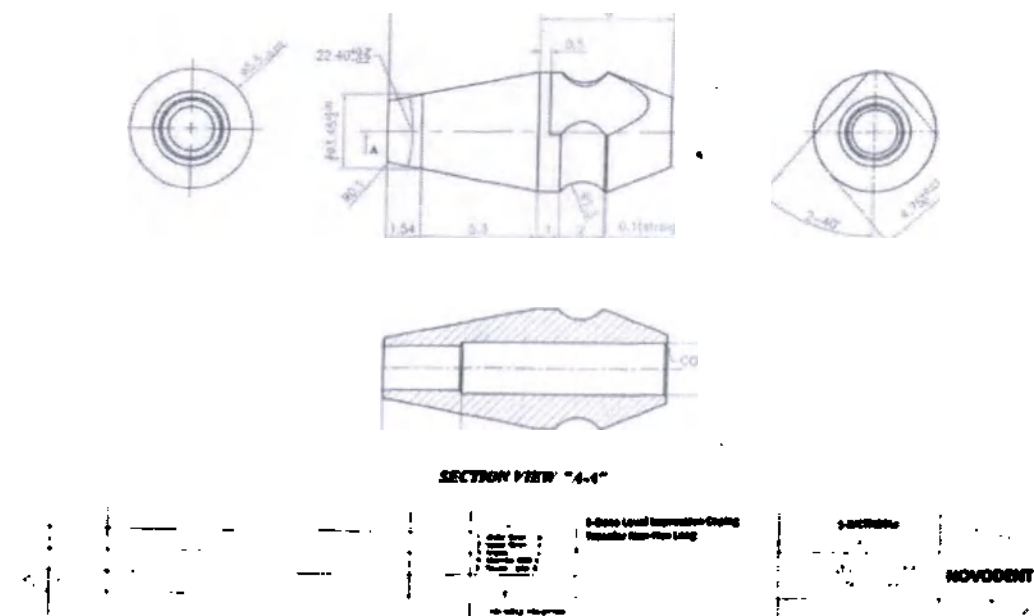Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN55Lc)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

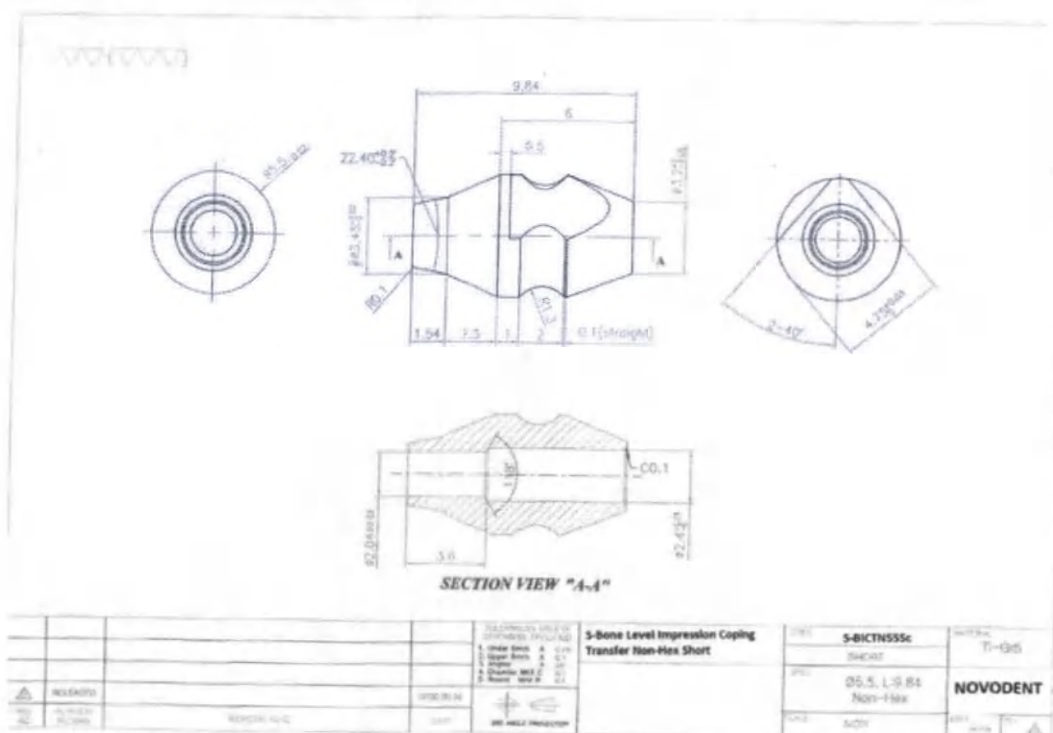Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN55Sc)



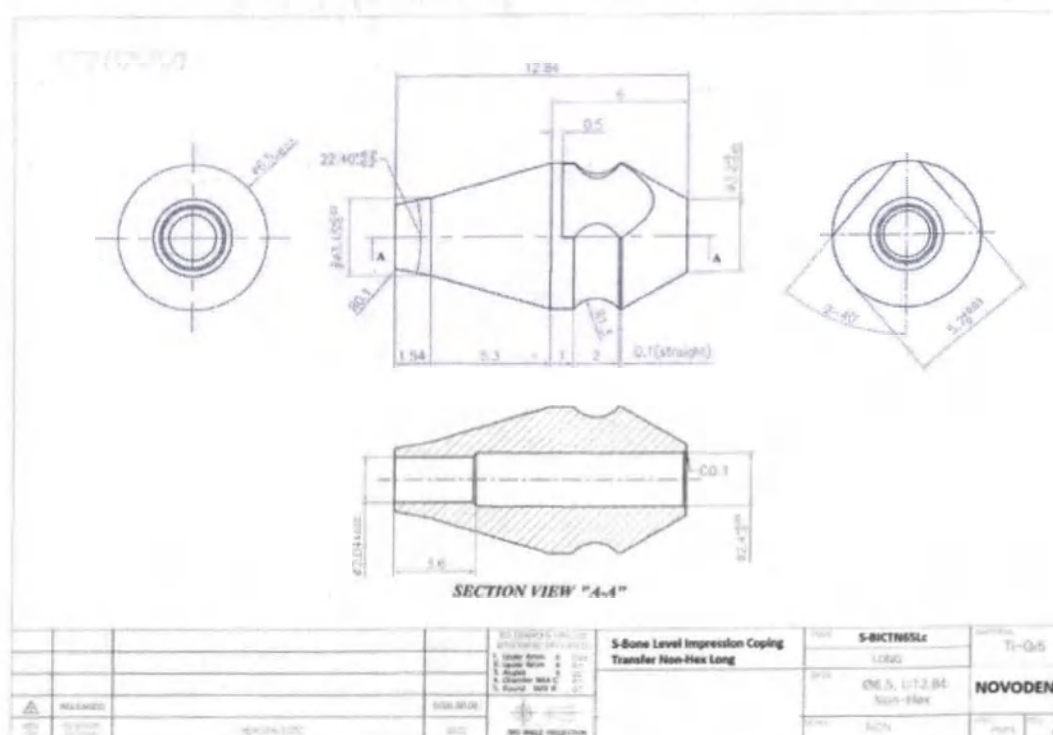Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN65Lc)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

[illegible]

Technical drawing of a 5-Tier Level Impression Coping. The drawing includes a top view showing concentric circles with diameters 1.75, 1.50, 1.25, and 1.00. A side view shows a stepped cylindrical part with a total length of 1.75 and a central hole of diameter 0.125. A cross-section view labeled "SECTION VIEW "A-A"" shows the internal structure with a central hole of diameter 0.125 and a total length of 1.75. The drawing is labeled "5-Tier Level Impression Coping" and "PICA up".

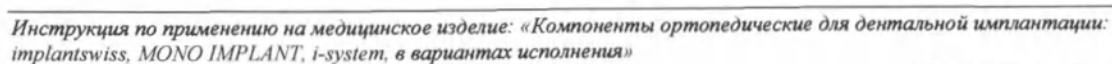
Страница 194 из 344




[illegible][illegible]

Страница 196 из 344

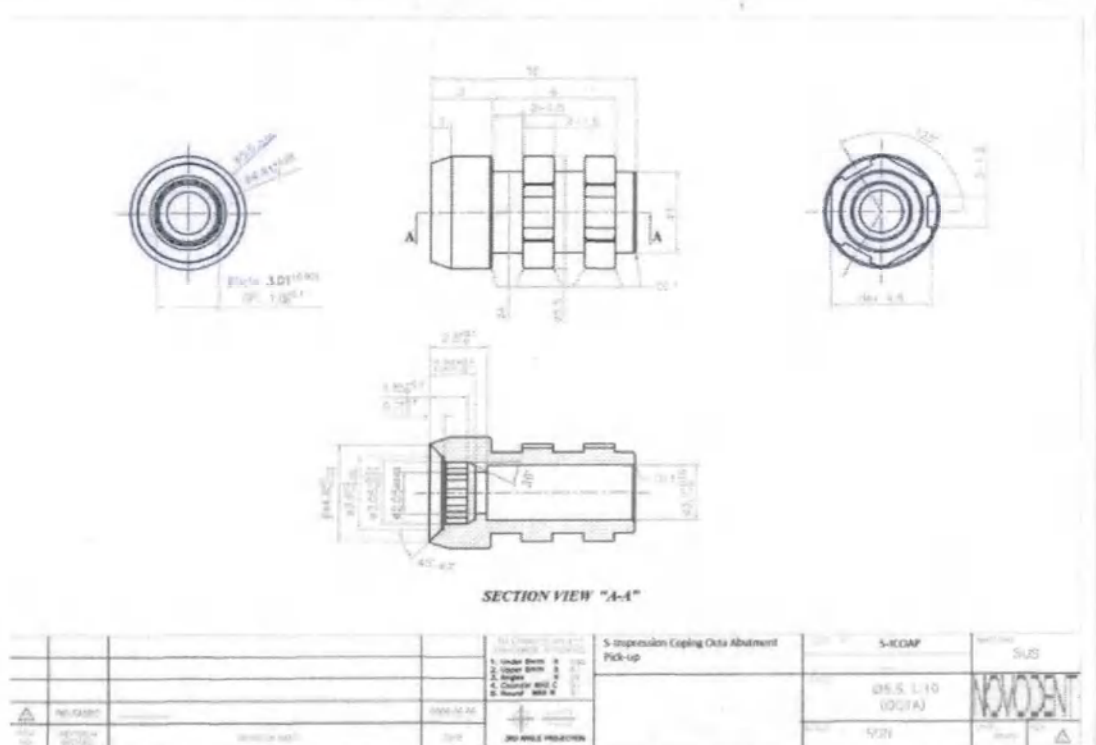Трансфер Impression Coping Octa Abutment Pickup (артикул S-ICOAP)



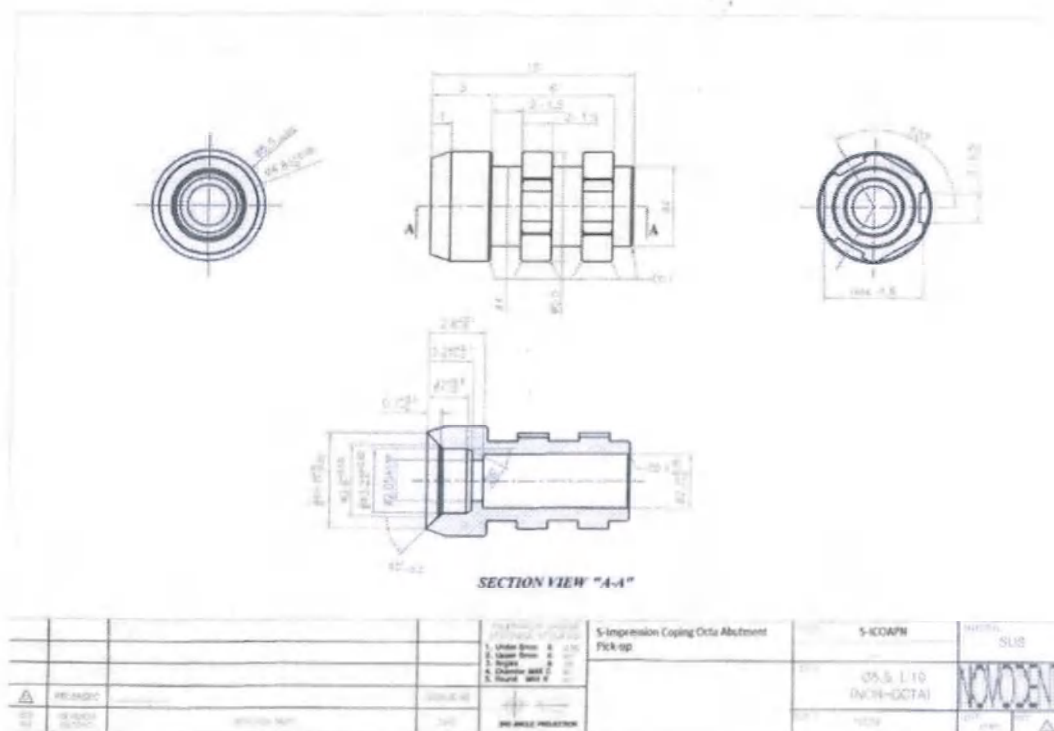Трансфер Impression Coping Octa Abutment Pickup Non-Hex (артикул S-ICOAPN)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

SECTION VIEW "A-A"

REVISIONS	DATE	BY	CHKD	APP'D	DESCRIPTION
1	01/10/01	...	...	...	...
2	01/10/01	...	...	...	...
3	01/10/01	...	...	...	...
4	01/10/01	...	...	...	...
5	01/10/01	...	...	...	...
6	01/10/01	...	...	...	...
7	01/10/01	...	...	...	...
8	01/10/01	...	...	...	...
9	01/10/01	...	...	...	...
10	01/10/01	...	...	...	...
11	01/10/01	...	...	...	...
12	01/10/01	...	...	...	...
13	01/10/01	...	...	...	...
14	01/10/01	...	...	...	...
15	01/10/01	...	...	...	...
16	01/10/01	...	...	...	...
17	01/10/01	...	...	...	...
18	01/10/01	...	...	...	...
19	01/10/01	...	...	...	...
20	01/10/01	...	...	...	...
21	01/10/01	...	...	...	...
22	01/10/01	...	...	...	...
23	01/10/01	...	...	...	...
24	01/10/01	...	...	...	...
25	01/10/01	...	...	...	...
26	01/10/01	...	...	...	...
27	01/10/01	...	...	...	...
28	01/10/01	...	...	...	...
29	01/10/01	...	...	...	...
30	01/10/01	...	...	...	...
31	01/10/01	...	...	...	...
32	01/10/01	...	...	...	...
33	01/10/01	...	...	...	...
34	01/10/01	...	...	...	...
35	01/10/01	...	...	...	...
36	01/10/01	...	...	...	...
37	01/10/01	...	...	...	...
38	01/10/01	...	...	...	...
39	01/10/01	...	...	...	...
40	01/10/01	...	...	...	...
41	01/10/01	...	...	...	...
42	01/10/01	...	...	...	...
43	01/10/01	...	...	...	...
44	01/10/01	...	...	...	...
45	01/10/01	...	...	...	...
46	01/10/01	...	...	...	...
47	01/10/01	...	...	...	...
48	01/10/01	...	...	...	...
49	01/10/01	...	...	...	...
50	01/10/01	...	...	...	...
51	01/10/01	...	...	...	...
52	01/10/01	...	...	...	...
53	01/10/01	...	...	...	...
54	01/10/01	...	...	...	...
55	01/10/01	...	...	...	...
56	01/10/01	...	...	...	...
57	01/10/01	...	...	...	...
58	01/10/01	...	...	...	...
59	01/10/01	...	...	...	...
60	01/10/01	...	...	...	...
61	01/10/01	...	...	...	...
62	01/10/01	...	...	...	...
63	01/10/01	...	...	...	...
64	01/10/01	...	...	...	...
65	01/10/01	...	...	...	...
66	01/10/01	...	...	...	...
67	01/10/01	...	...	...	...
68	01/10/01	...	...	...	...
69	01/10/01	...	...	...	...
70	01/10/01	...	...	...	...
71	01/10/01	...	...	...	...
72	01/10/01	...	...	...	...
73	01/10/01	...	...	...	...
74	01/10/01	...	...	...	



Technical drawing of a mechanical part, labeled "SECTION VIEW A-A". The drawing shows a cross-section of a shaft with a complex, multi-faceted profile. The drawing includes dimensions, a title block, and a detail view "DETAIL B".

SECTION VIEW "A-A"


DETAIL "B"
SCALE 1:1

1. Under Drive	2. Under Drive	3. Under Drive	4. Under Drive	5. Under Drive
6. Under Drive	7. Under Drive	8. Under Drive	9. Under Drive	10. Under Drive
11. Under Drive	12. Under Drive	13. Under Drive	14. Under Drive	15. Under Drive
16. Under Drive	17. Under Drive	18. Under Drive	19. Under Drive	20. Under Drive
21. Under Drive	22. Under Drive	23. Under Drive	24. Under Drive	25. Under Drive
26. Under Drive	27. Under Drive	28. Under Drive	29. Under Drive	30. Under Drive
31. Under Drive	32. Under Drive	33. Under Drive	34. Under Drive	35. Under Drive
36. Under Drive	37. Under Drive	38. Under Drive	39. Under Drive	40. Under Drive
41. Under Drive	42. Under Drive	43. Under Drive	44. Under Drive	45. Under Drive
46. Under Drive	47. Under Drive	48. Under Drive	49. Under Drive	50. Under Drive
51. Under Drive	52. Under Drive	53. Under Drive	54. Under Drive	55. Under Drive
56. Under Drive	57. Under Drive	58. Under Drive	59. Under Drive	60. Under Drive
61. Under Drive	62. Under Drive	63. Under Drive	64. Under Drive	65. Under Drive
66. Under Drive	67. Under Drive	68. Under Drive	69. Under Drive	70. Under Drive
71. Under Drive	72. Under Drive	73. Under Drive	74. Under Drive	75. Under Drive
76. Under Drive	77. Under Drive	78. Under Drive	79. Under Drive	80. Under Drive
81. Under Drive	82. Under Drive	83. Under Drive	84. Under Drive	85. Under Drive
86. Under Drive	87. Under Drive	88. Under Drive	89. Under Drive	90. Under Drive
91. Under Drive	92. Under Drive	93. Under Drive	94. Under Drive	95. Under Drive
96. Under Drive	97. Under Drive	98. Under Drive	99. Under Drive	100. Under Drive
101. Under Drive	102. Under Drive	103. Under Drive	104. Under Drive	105. Under Drive
106. Under Drive	107. Under Drive	108. Under Drive	109. Under Drive	110. Under Drive
111. Under Drive	112. Under Drive	113. Under Drive	114. Under Drive	115. Under Drive
116. Under Drive	117. Under Drive	118. Under Drive	119. Under Drive	120. Under Drive
121. Under Drive	122. Under Drive	123. Under Drive	124. Under Drive	125. Under Drive
126. Under Drive	127. Under Drive	128. Under Drive	129. Under Drive	130. Under Drive
131. Under Drive	132. Under Drive	133. Under Drive	134. Under Drive	135. Under Drive
136. Under Drive	137. Under Drive	138. Under Drive	139. Under Drive	140. Under Drive
141. Under Drive	142. Under Drive	143. Under Drive	144. Under Drive	145. Under Drive
146. Under Drive	147. Under Drive	148. Under Drive	149. Under Drive	150. Under Drive
151. Under Drive	152. Under Drive	153. Under Drive	154. Under Drive	155. Under Drive
156. Under Drive	157. Under Drive	158. Under Drive	159. Under Drive	160. Under Drive
161. Under Drive	162. Under Drive	163. Under Drive	164. Under Drive	165. Under Drive
166. Under Drive	167. Under Drive	168. Under Drive	169. Under Drive	170. Under Drive
171. Under Drive	172. Under Drive	173. Under Drive	174. Under Drive	175. Under Drive
176. Under Drive	177. Under Drive	178. Under Drive	179. Under Drive	180. Under Drive
181. Under Drive	182. Under Drive	183. Under Drive	184. Under Drive	185. Under Drive
186. Under Drive	187. Under Drive	188. Under Drive	189. Under Drive	190. Under Drive
191. Under Drive	192. Under Drive	193. Under Drive	194. Under Drive	195. Under Drive
196. Under Drive	197. Under Drive	198. Under Drive	199. Under Drive	200. Under Drive
201. Under Drive	202. Under Drive	203. Under Drive	204. Under Drive	205. Under Drive
206. Under Drive	207. Under Drive	208. Under Drive	209. Under Drive	210. Under Drive
211. Under Drive	212. Under Drive	213. Under Drive	214. Under Drive	215. Under Drive
216. Under Drive	217. Under Drive	218. Under Drive	219. Under Drive	220. Under Drive
221. Under Drive	222. Under Drive	223. Under Drive	224. Under Drive	225. Under Drive
226. Under Drive	227. Under Drive	228. Under Drive	229. Under Drive	230. Under Drive
231. Under Drive	232. Under Drive	233. Under Drive	234. Under Drive	235. Under Drive
236. Under Drive	237. Under Drive	238. Under Drive	239. Under Drive	240. Under Drive
241. Under Drive	242. Under Drive	243. Under Drive	244. Under Drive	245. Under Drive
246. Under Drive	247. Under Drive	248. Under Drive	249. Under Drive	250. Under Drive
251. Under Drive	252. Under Drive	253. Under Drive	254. Under Drive	255. Under Drive
256. Under Drive	257. Under Drive	258. Under Drive	259. Under Drive	260. Under Drive
261. Under Drive	262. Under Drive	263. Under Drive	264. Under Drive	265. Under Drive
266. Under Drive	267. Under Drive	268. Under Drive	269. Under Drive	270. Under Drive
271. Under Drive	272. Under Drive	273. Under Drive	274. Under Drive	275. Under Drive
276. Under Drive	277. Under Drive	278. Under Drive	279. Under Drive	280. Under Drive
281. Under Drive	282. Under Drive	283. Under Drive	284. Under Drive	285. Under Drive
286. Under Drive	287. Under Drive	288. Under Drive	289. Under Drive	290. Under Drive
291. Under Drive	292. Under Drive	293. Under Drive	294. Under Drive	295. Under Drive
296. Under Drive	297. Under Drive	298. Under Drive	299. Under Drive	300. Under Drive
301. Under Drive	302. Under Drive	303.		

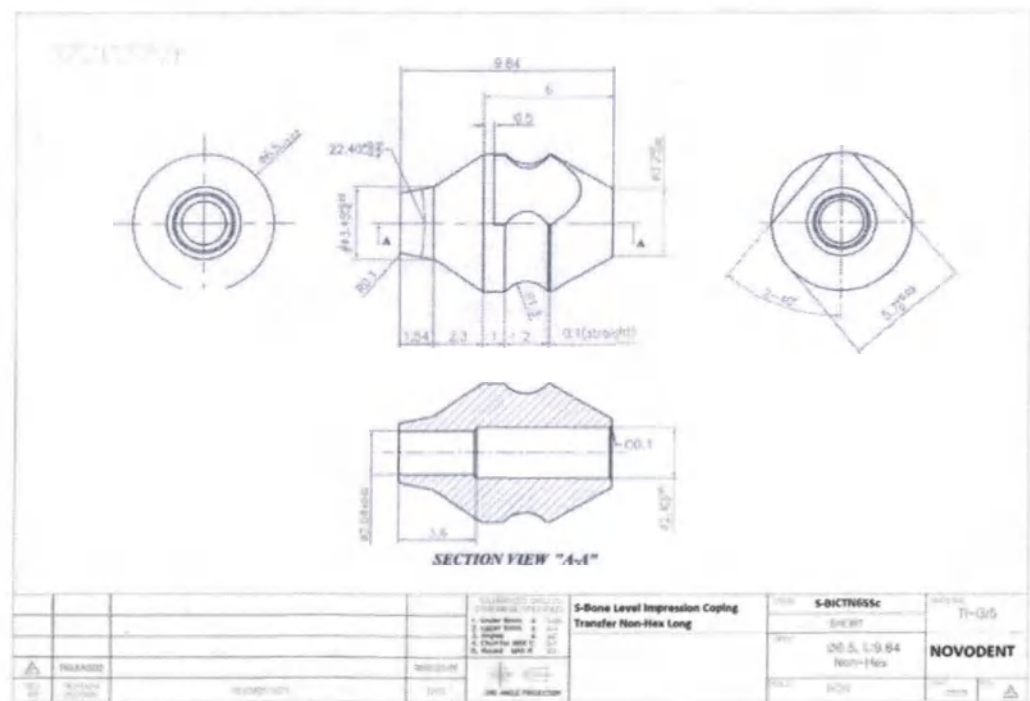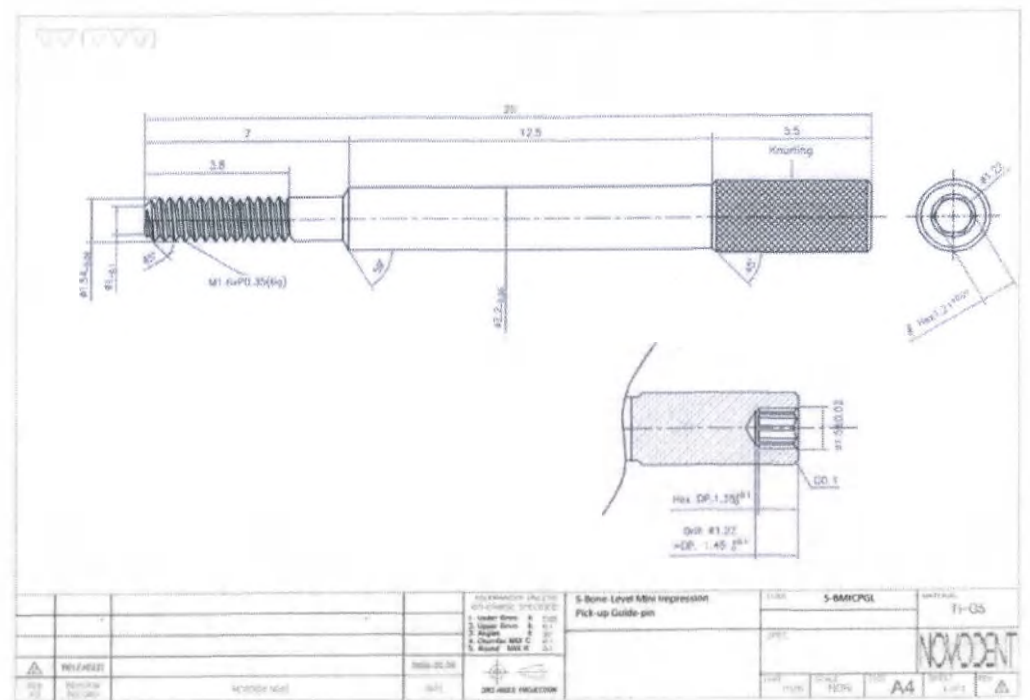
Страница 198 из 344



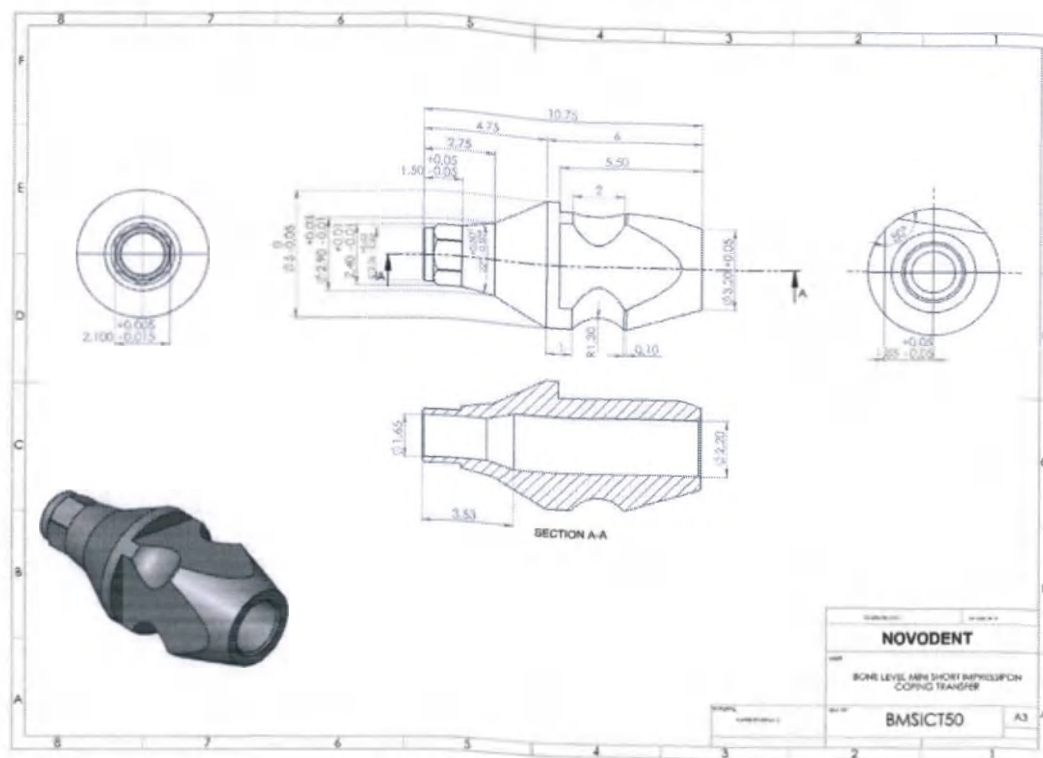Трансфер Bone Level Mini Short Impression Coping Transfer (артикул S-BMSICT50)




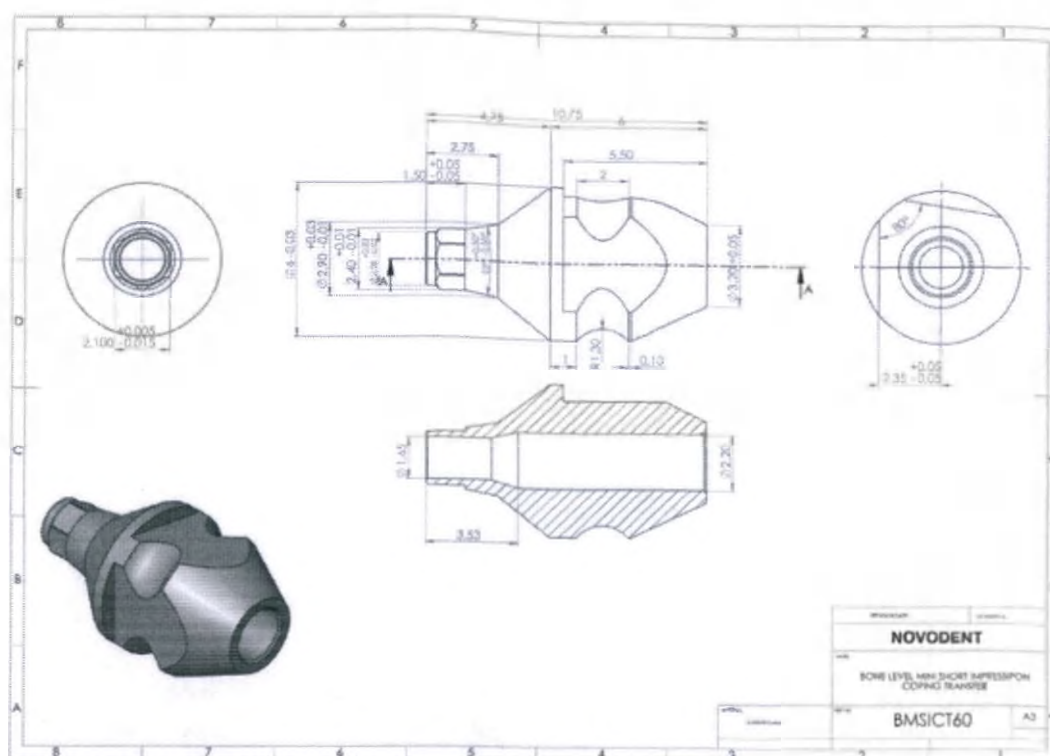Трансфер Bone Level Mini Short Impression Coping Transfer (артикул S-BMSICT60)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

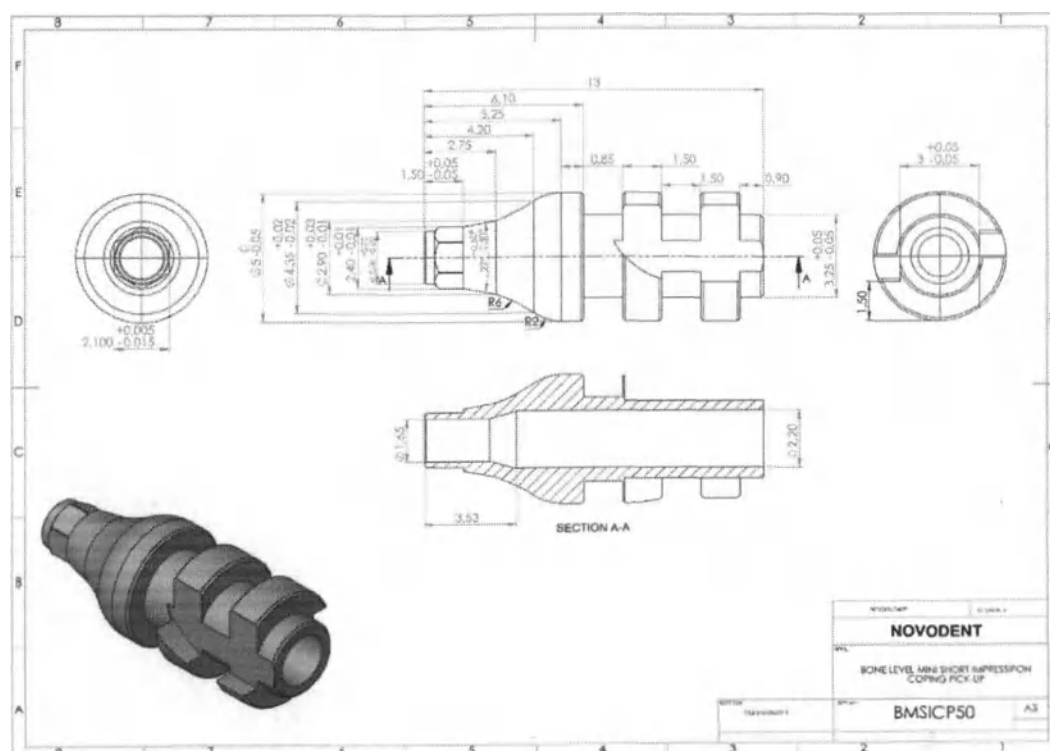Трансфер Bone Level Mini Short Impression Pickup Transfer (арткул S-BMSICP50)



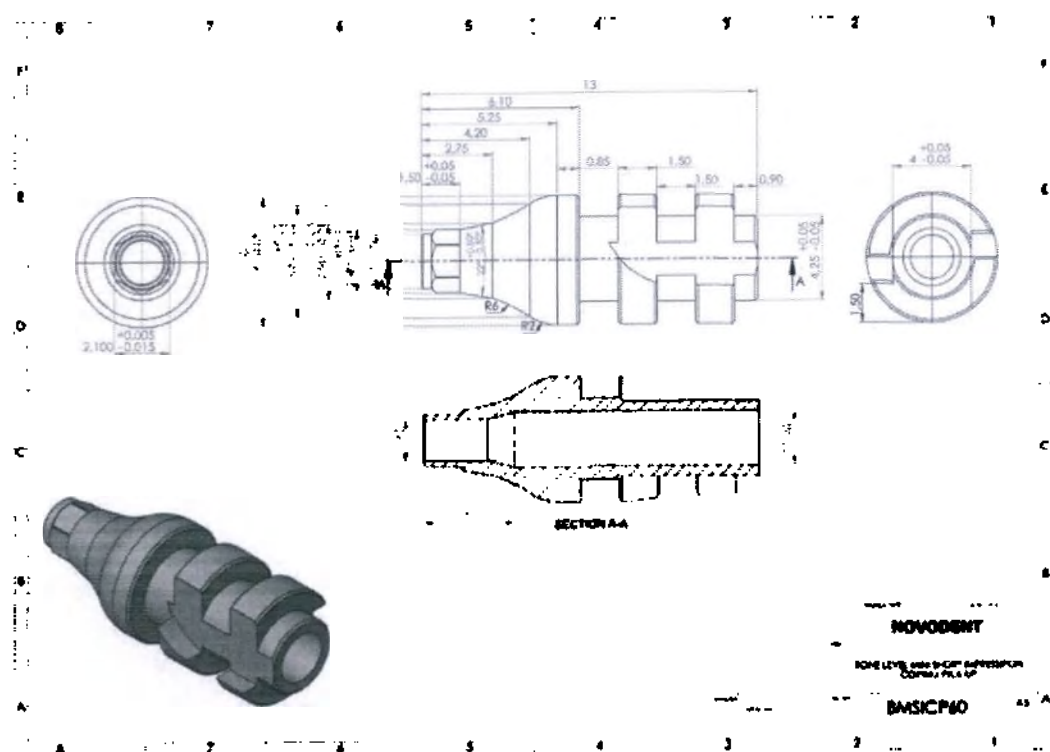
Трансфер Bone Level Mini Short Impression Pickup Transfer (арткул S-BMSICP60)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 201 из 344

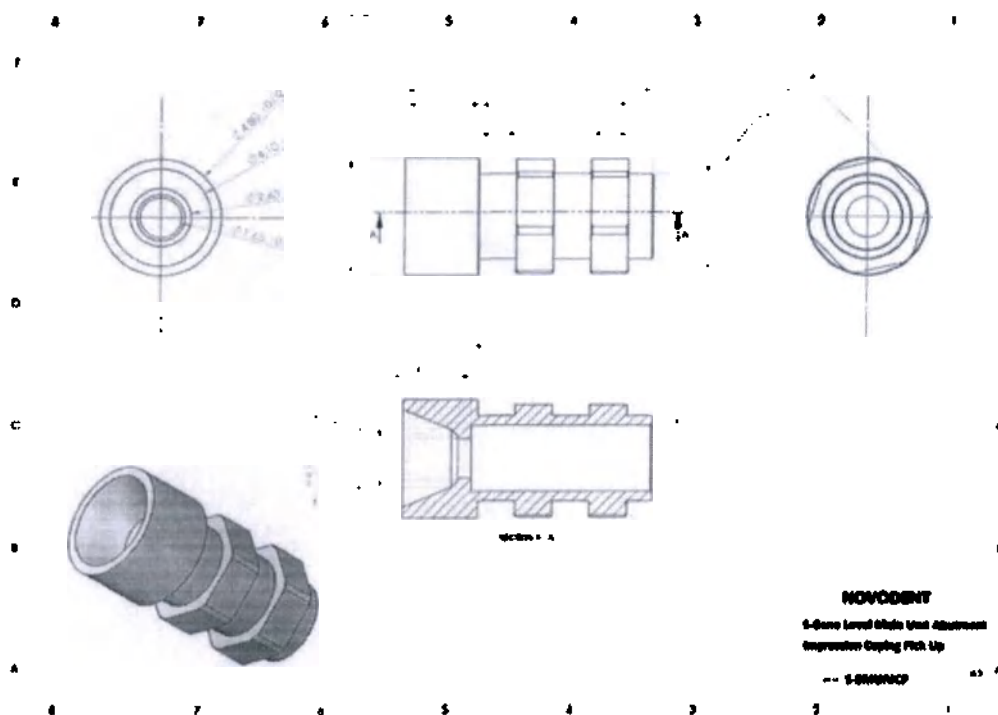Трансфер Abutment Impression Coping Pick Up (артикул S-BMUAICP)



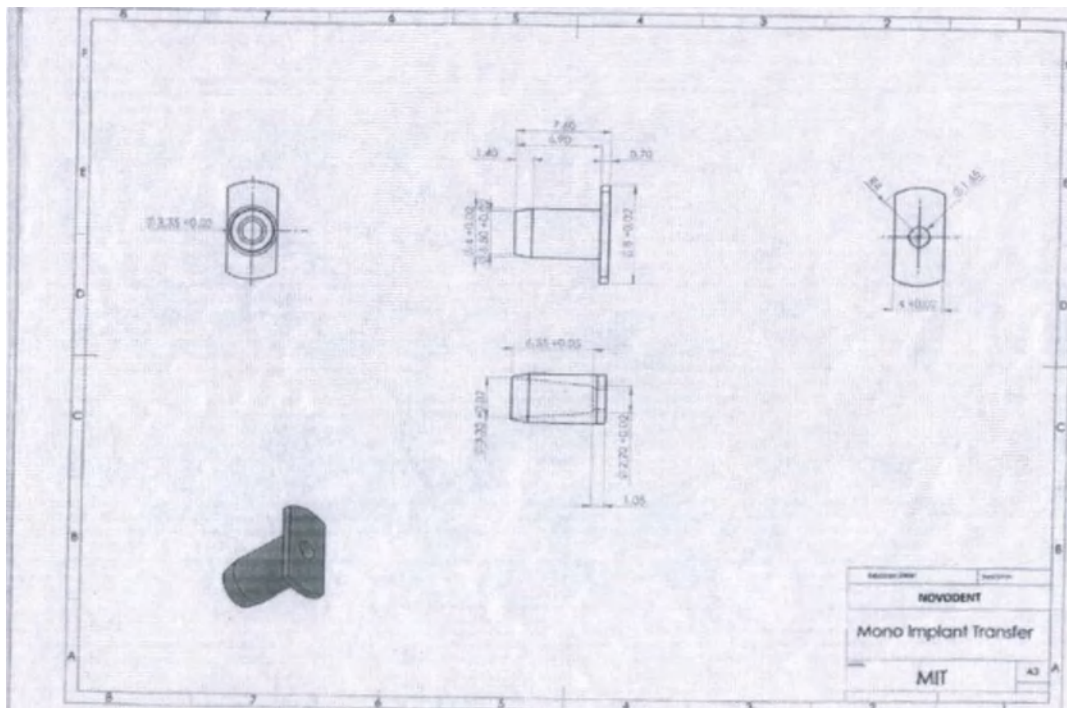
Трансфер Mono Implant Transfer (артикул MIT)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 202 из 344

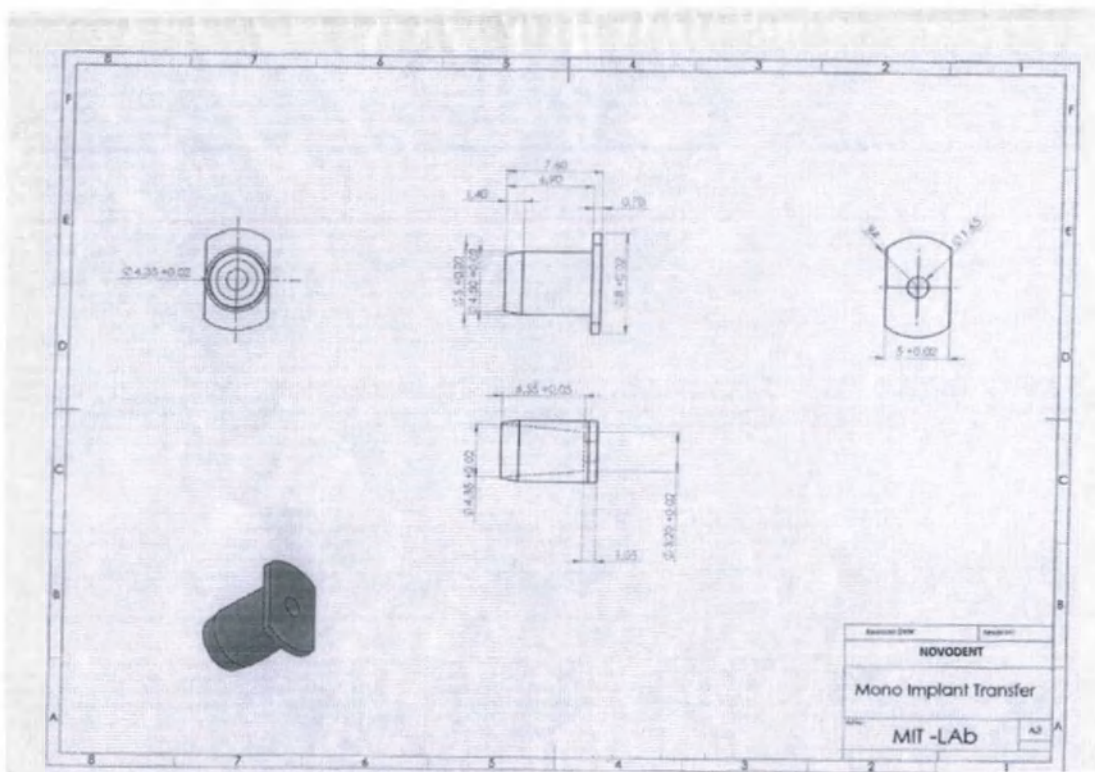Трансфер Mono Implant Transfer (артикул MIT-LAb)



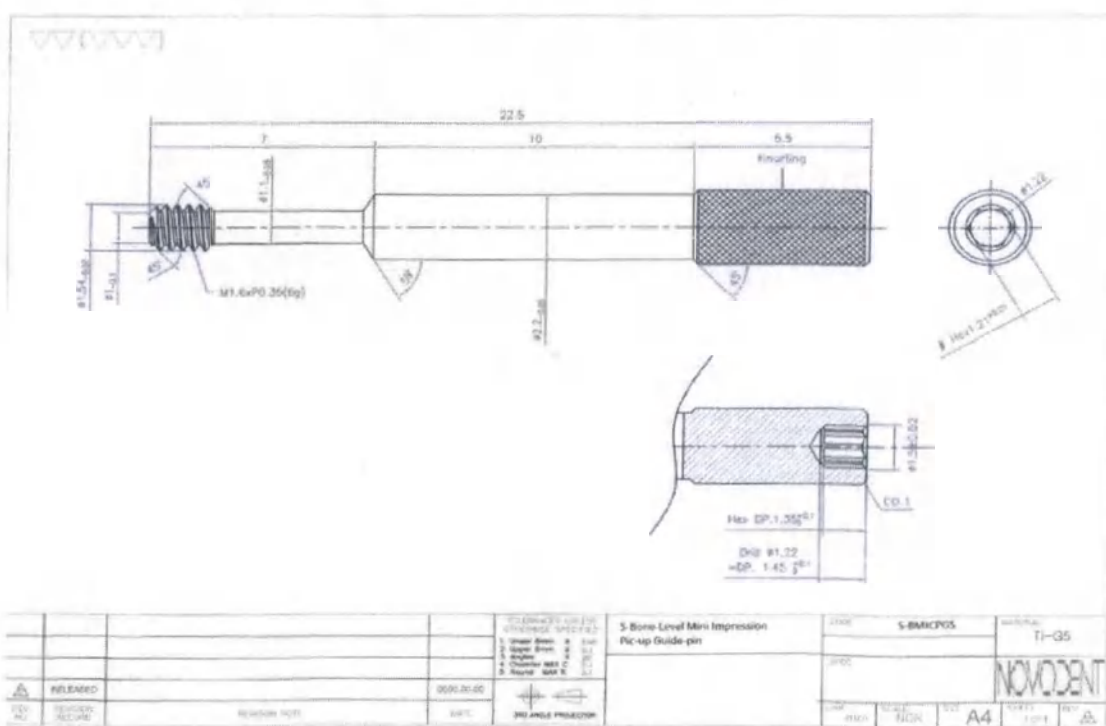Направляющий пин трансфера Bone Level Mini Impression Coping Pickup Guide Pin Short (артикул S-BMICPGS)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

		S-Bone-Level Impression Pick-up Guide-pin		S-BICPGL		Ti-Gr5	
				Length : 27mm Guide : 19mm		NOVOCENT	


Technical drawing of the S-Bone-Level Impression Pick-up Guide-pin. The drawing shows a side view and a cross-section. The side view includes dimensions: total length 23, segments of 8, 9.5, and 5.5. A spring with MG 0.475-4 (kg) is shown with dimensions 5.5, 0.8, and 4. The cross-section shows a diameter of 4.15 ±0.02 and a feature labeled 'Rinsuling'. A table of dimensions is provided: Max DP 1.25, Min DP 0.22, Max 1.5, Min 0.5. A cross-section view shows a diameter of 4.15 ±0.02 and a feature labeled 'Rinsuling'.

Страница 204 из 344

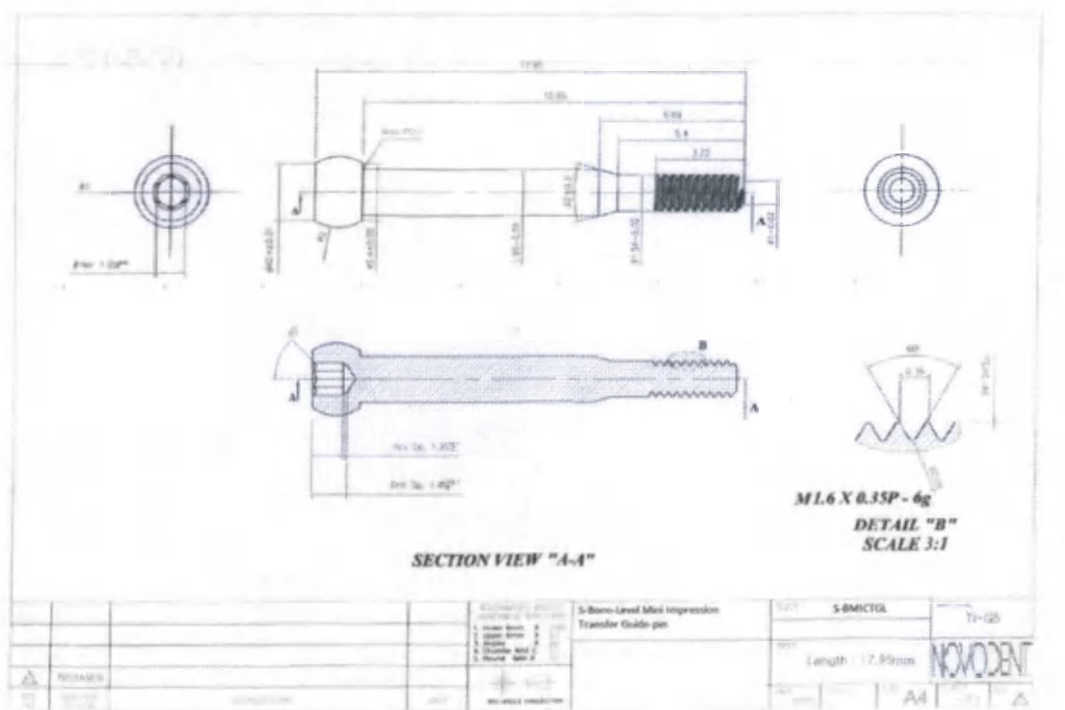Направляющий пин Bone Level Mini Impression Coping Transfer Guide Pin Long (артикул S-BMICTGL)




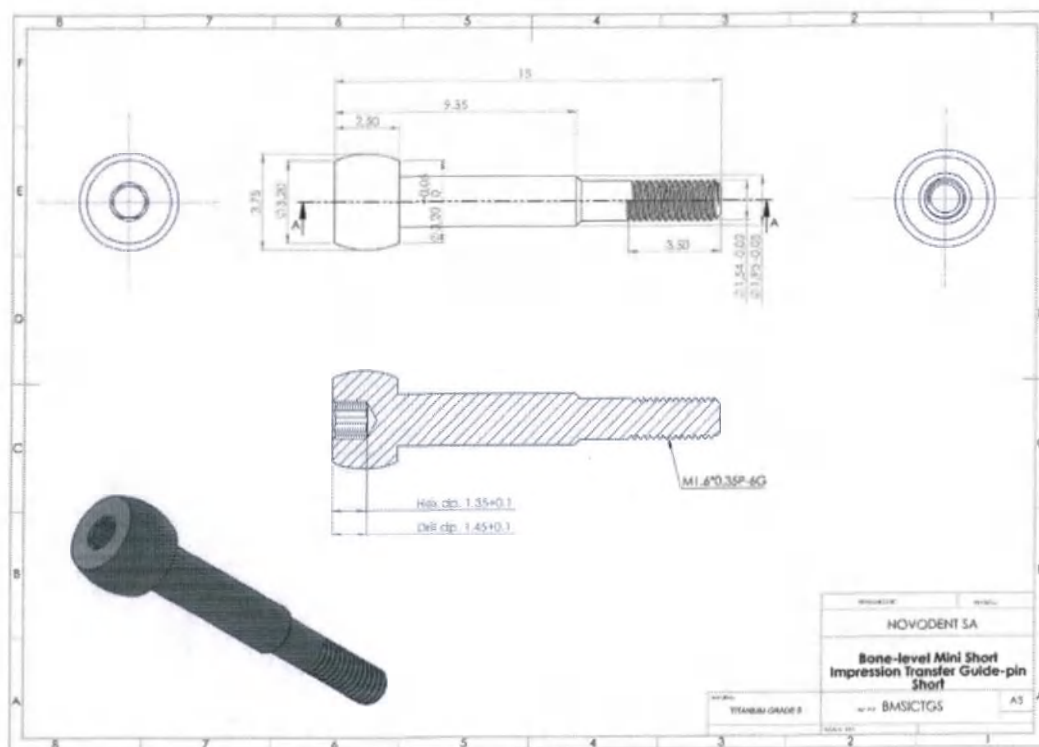Направляющий пин Bone Level Mini Impression Coping Transfer Guide Pin Short (артикул S-BMICTGS)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

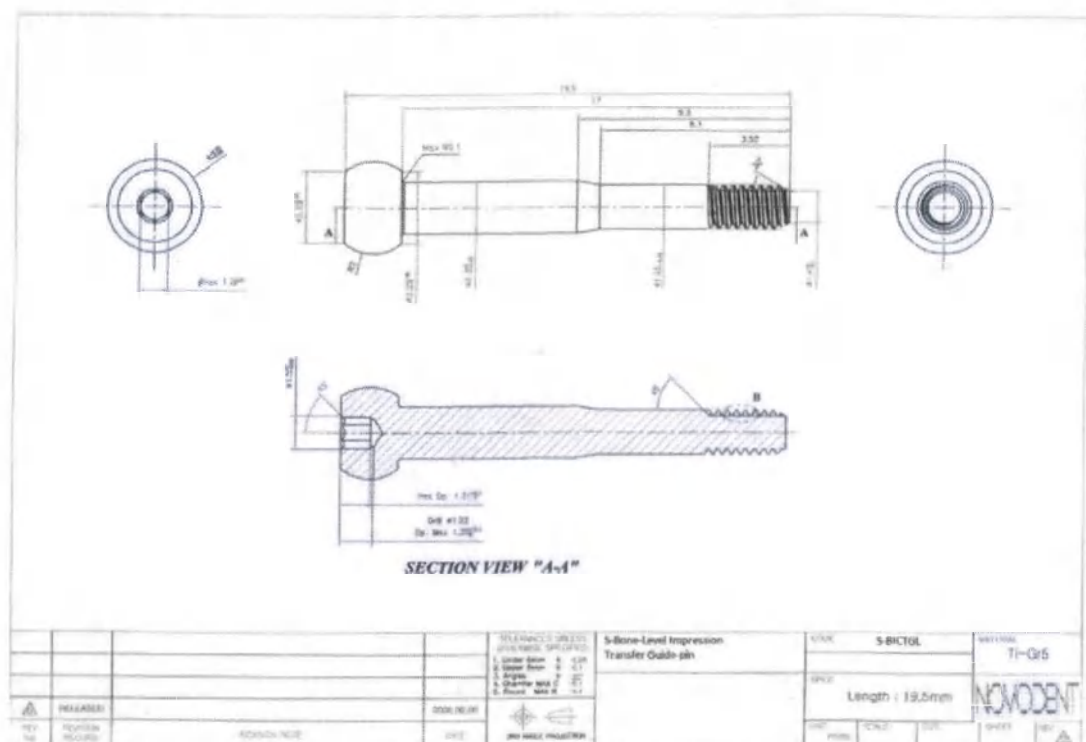Направляющий пин Bone Level Impression Coping Transfer Guide Pin Long (артикул S-BICTGL)



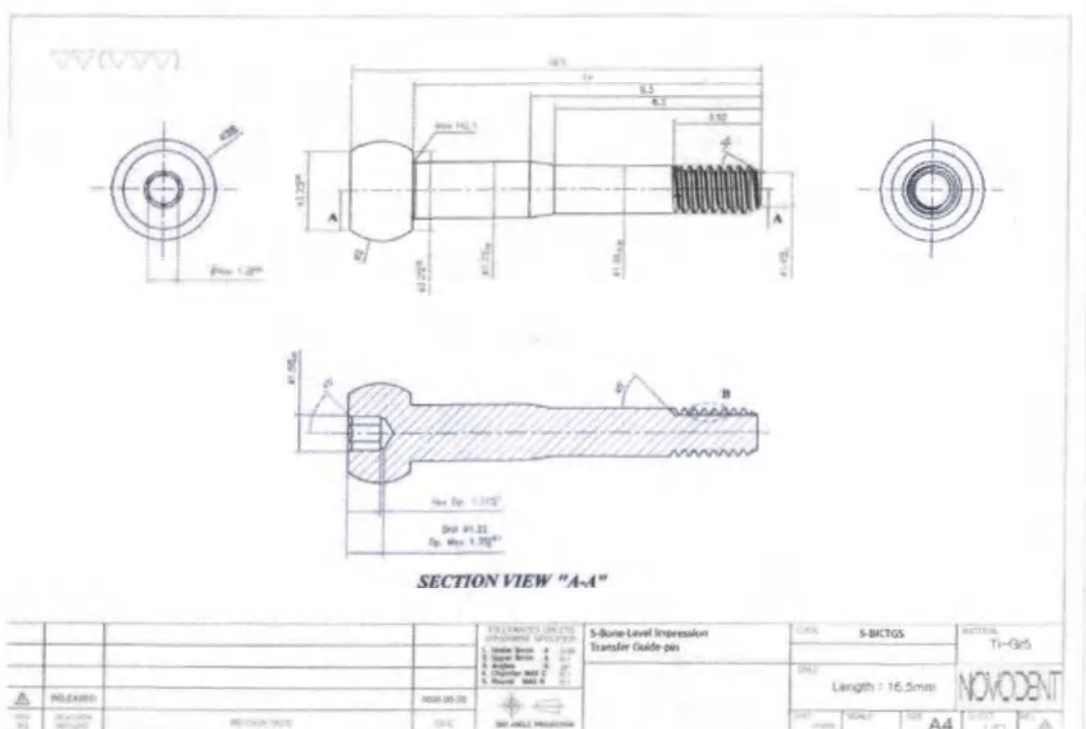Направляющий пин Bone Level Impression Coping Transfer Guide Pin Short (артикул S-BICTGS)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

DETAIL "B"
SCALE 1:1

DETAIL "A"
(SCALE 10:1)

Tissue Level Impression Coping Pick-up Guide Pin Long		S-TRIGER	
		SIZE	
		M2.0 x .4P length=22.5mm	
		MATERIAL	

Fig. 1.20

SECTION VIEW "A-A"

5-Bone-Level Impression Transfer Oakdo pin	5-Bone-Level Impression Transfer Oakdo pin	5-Bone-Level Impression Transfer Oakdo pin
Length : 19.5mm	Length : 19.5mm	Length : 19.5mm

Страница 207 из 344

SECTION VIEW "A-A"
DETAIL "B"
SCALE 3:1

REV	REVISION	DATE	0000.00.00	REL/ANALYST: JAL/YSB CHECKING: SPECIFIED 1. Design Review: 2. 0.17 3. Design Review: 4. 0.17 4. Design Review: 5. 0.17 5. Design Review: 6. 0.17	Tissue Level Impression Coping Transfer Guide Pin	CODE: S-TCTG014	MATERIAL: S1/S
REV	REVISION	DATE	0000.00.00	3RD PARTY INSPECTION		SPC: 04.7, L: 14	NOV 02 11 14
REV	REVISION	DATE	0000.00.00			SCALE: NON	REV: 1

Technical drawing of a Bone-level Mini Short Impression Transfer Guide-pin. The drawing includes a top view, a side view, and a cross-section A-A.

Top View Dimensions:

- Total length: 15
- Head length: 2.50
- Head diameter: 3.25
- Head hole diameter: 1.30
- Head hole length: 0.65
- Threaded section length: 3.50
- Threaded section diameter: $\varnothing 1.34 \pm 0.02$
- Threaded section tolerance: $\varnothing 1.33 -0.05$

Section A-A Dimensions:

- Head diameter: 1.35 ± 0.1
- Drill diameter: 1.45 ± 0.1
- Thread specification: M1.6 x 0.35P-6G

Part Information:

NAME	SUM	DATE
DESIGN		
DATE		
APP		

NOVODENT

Bone-level Mini Short Impression Transfer Guide-pin

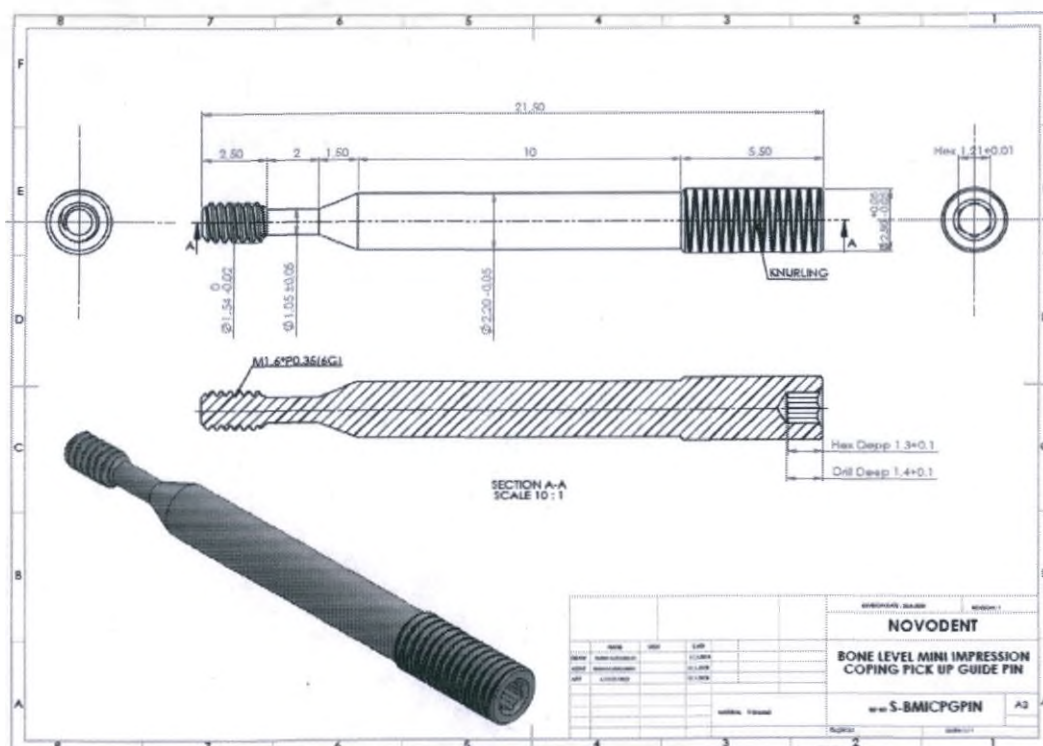
REF: BMSICTGp

DATE: 11/11/11


REV: 1.1

Страница 208 из 344

Направляющий пин Abutment Impression Coping Pick Up Guide Pin (артикул S-BMICPGPIN)




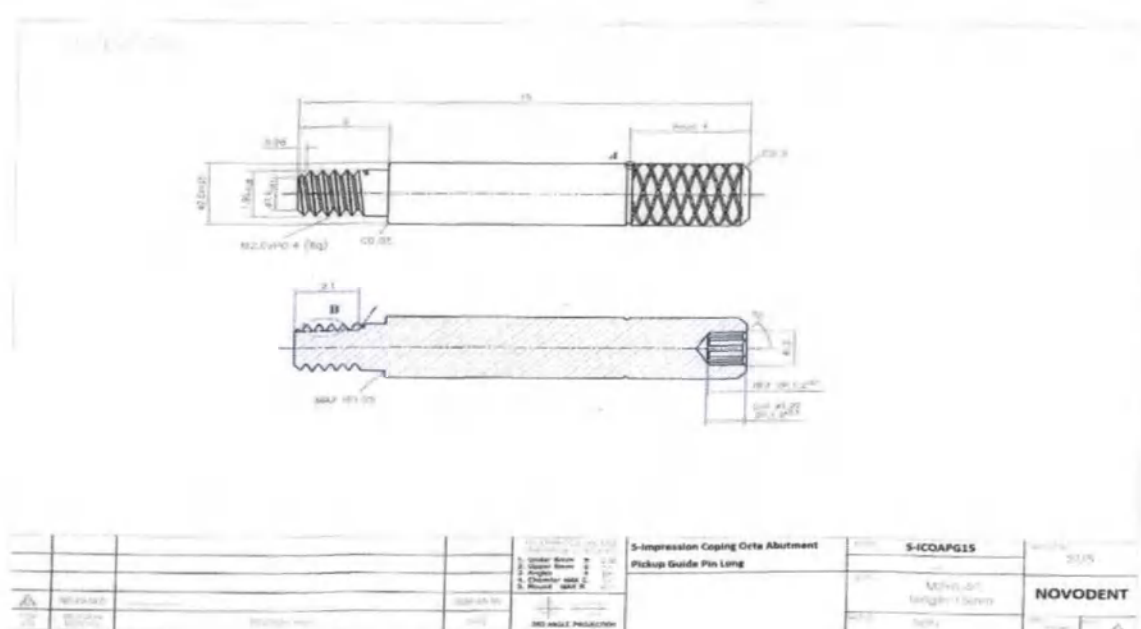Направляющий пин Impression Coping Octa Abutment Pickup Guide Pin Long (артикул S-ICOAPG15)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

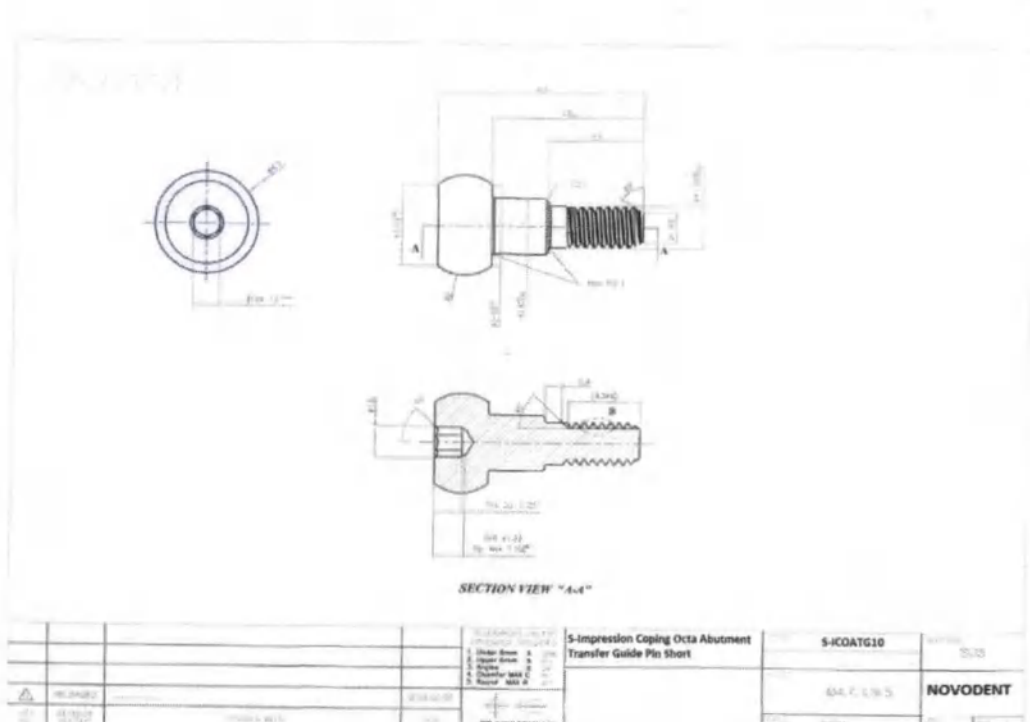Направляющий пин Impression Coping Octa Abutment Transfer Guide Pin Short (артикул S-ICOATG10)




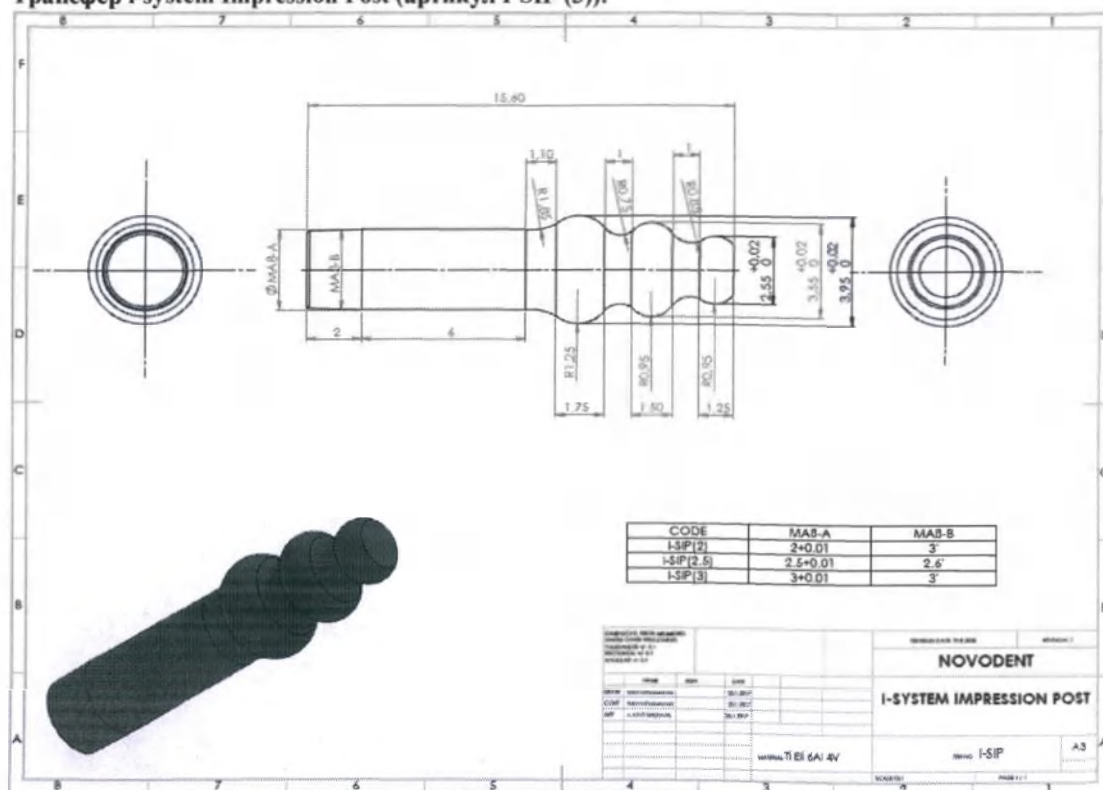Трансфер i-system Impression Post (артикул I-SIP (2)),
Трансфер i-system Impression Post (артикул I-SIP (2.5)),
Трансфер i-system Impression Post (артикул I-SIP (3)):




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

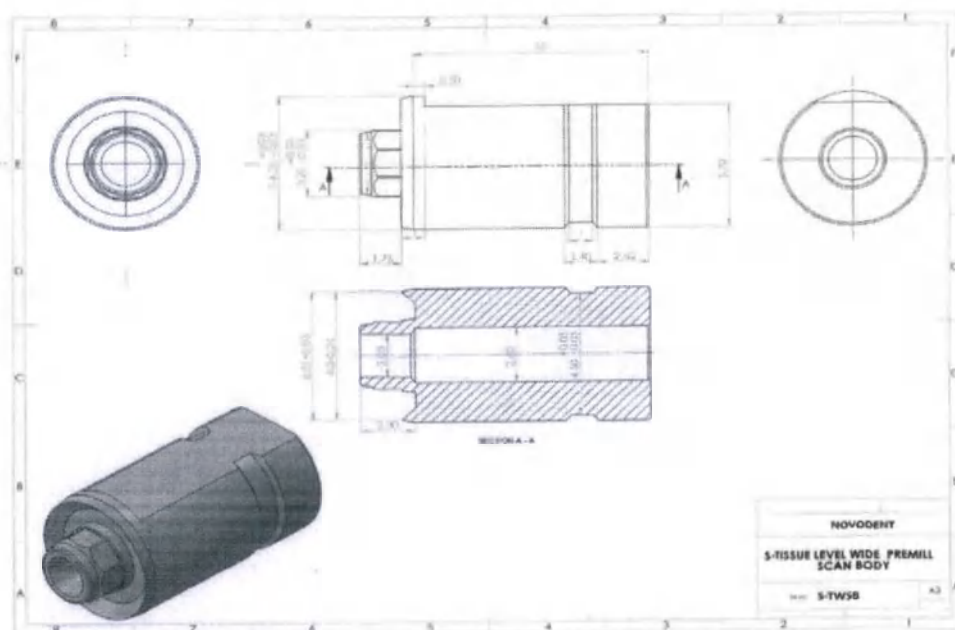Трансфер Implantswiss Tissue Level Wide Scanner Body (артикул S-TWSB)




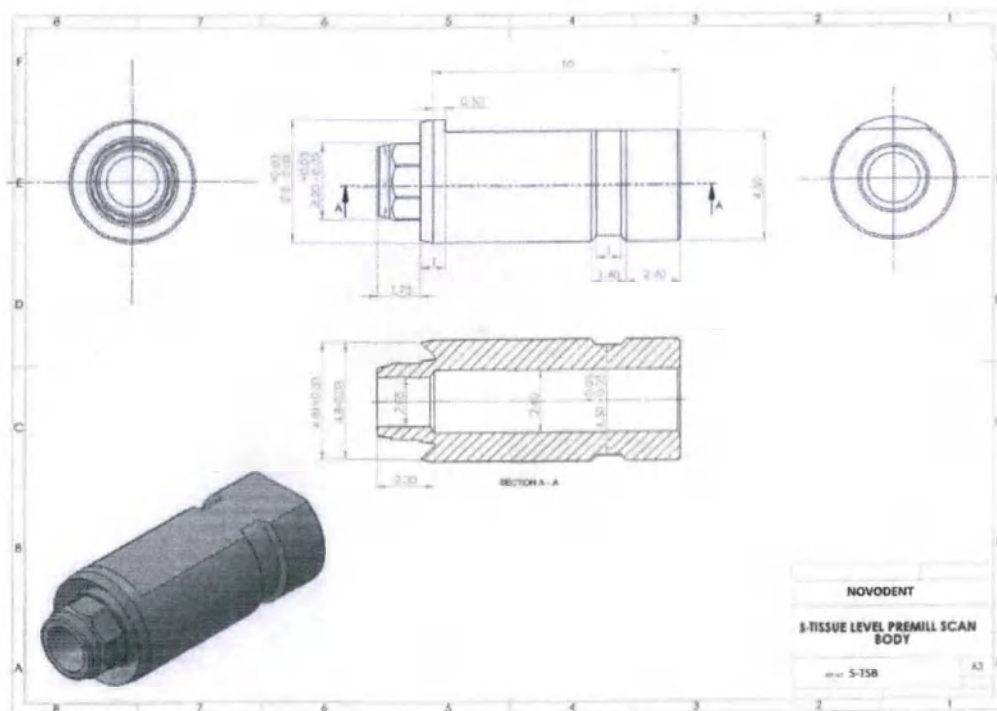Трансфер Implantswiss Tissue Level Wide Scanner Body (артикул S-TSB)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

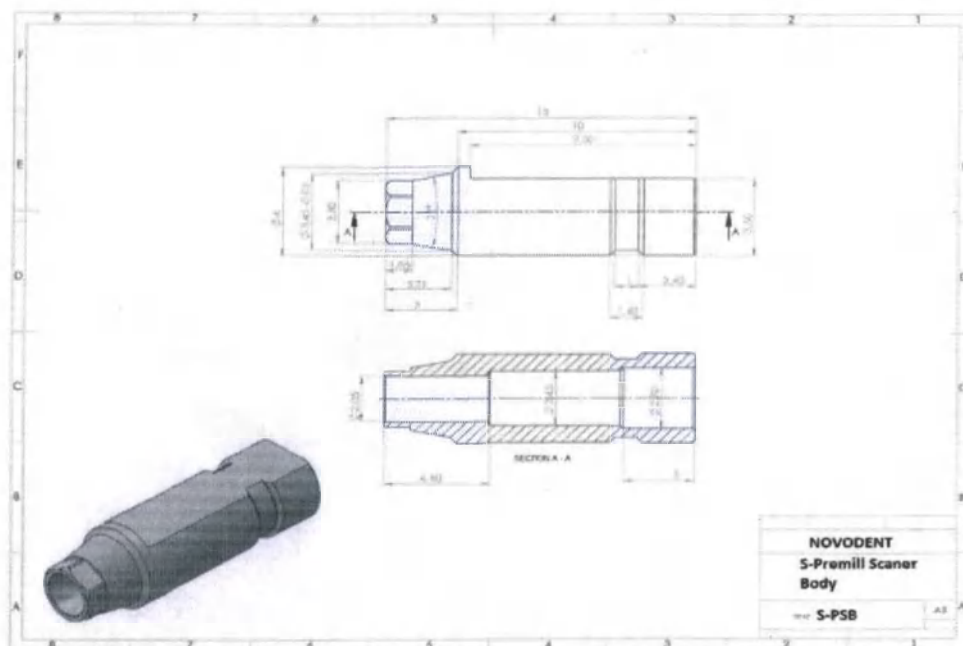Трансфер Implantswiss Premill Scanner Body (артикул S-PSB)



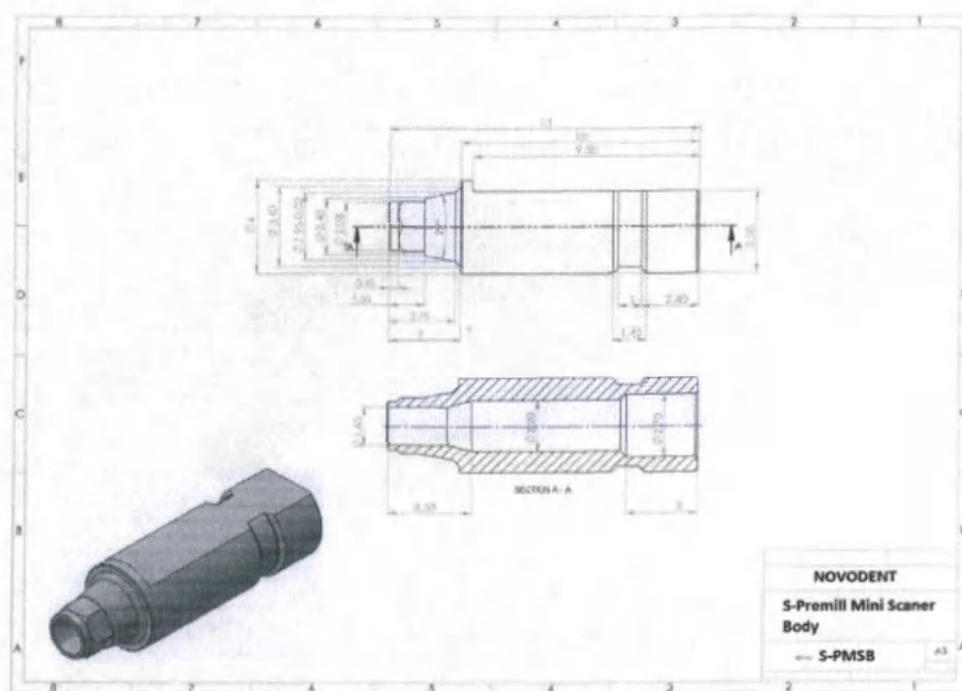
Трансфер Implantswiss Premill Mini Scanner Body (артикул S-PM5B)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 212 из 344

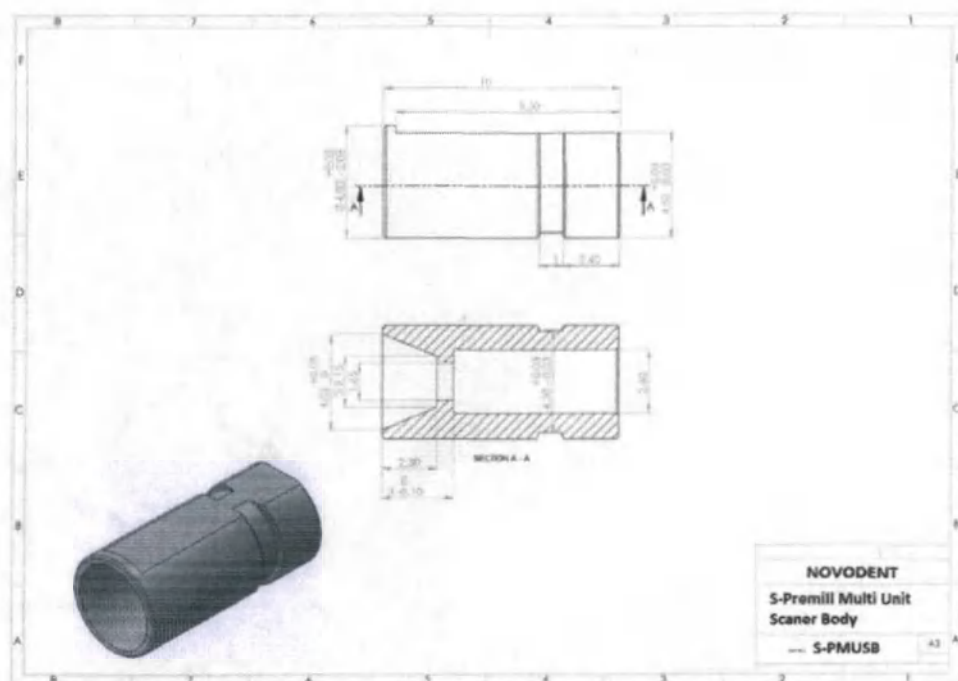Трансфер Implantswiss Multi Unit Scanner Body (артикул S-PMUSB)



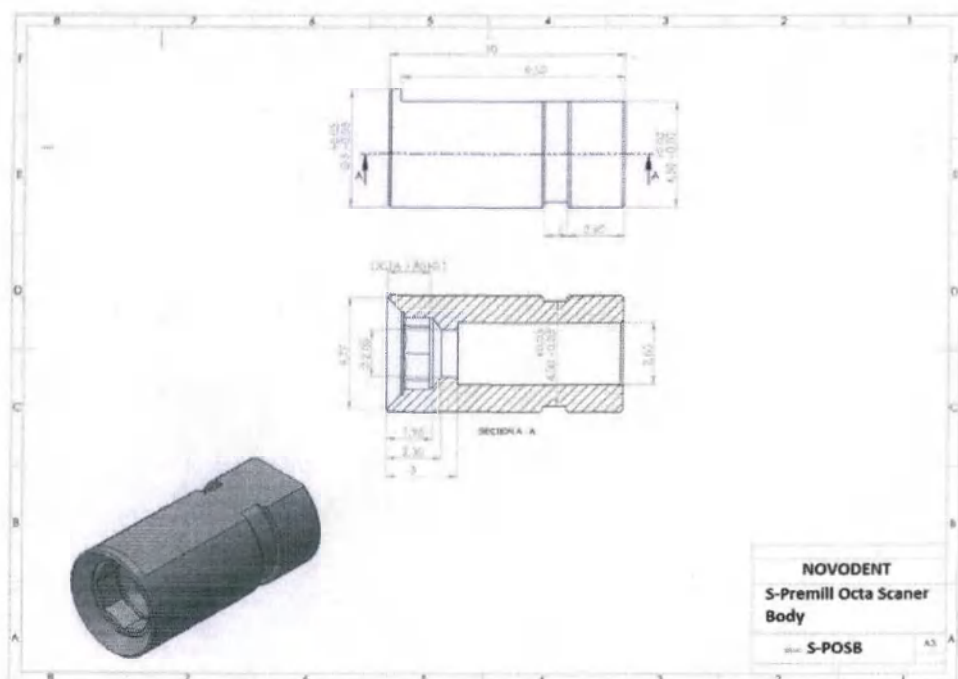
Трансфер Implantswiss Octa Scanner Body (артикул S-POSB)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Трансфер i-system Abutment Impression Coping Pick Up (артикул I-SMUAICP)

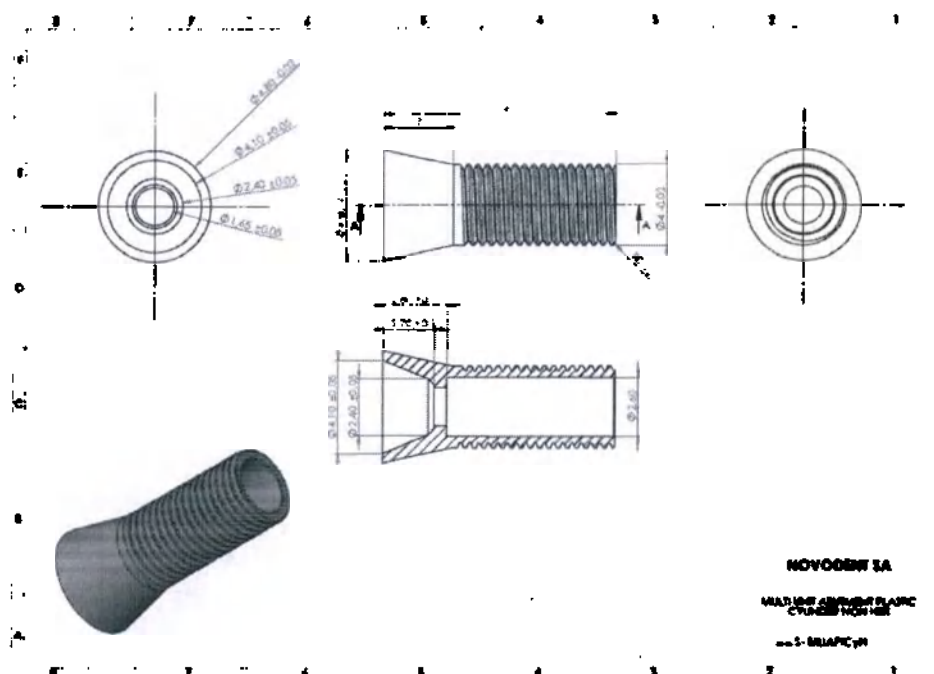Трансфер i-system Multi Unit Abutment Plastic Cylinder Non-Hex (артикул I-SMUAPICyN)




5. Колпачки:

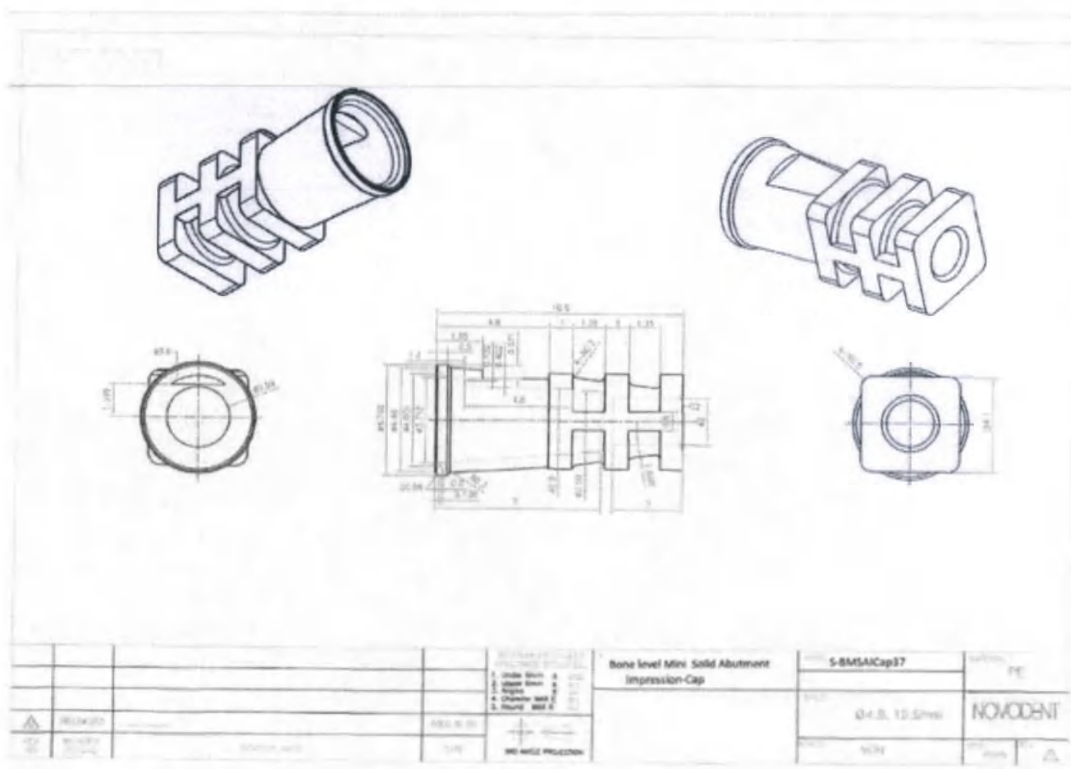Колпачок для снятия слепка Bone Level Mini Solid Abutment Impression Cap (артикул S-BMSAICap37)



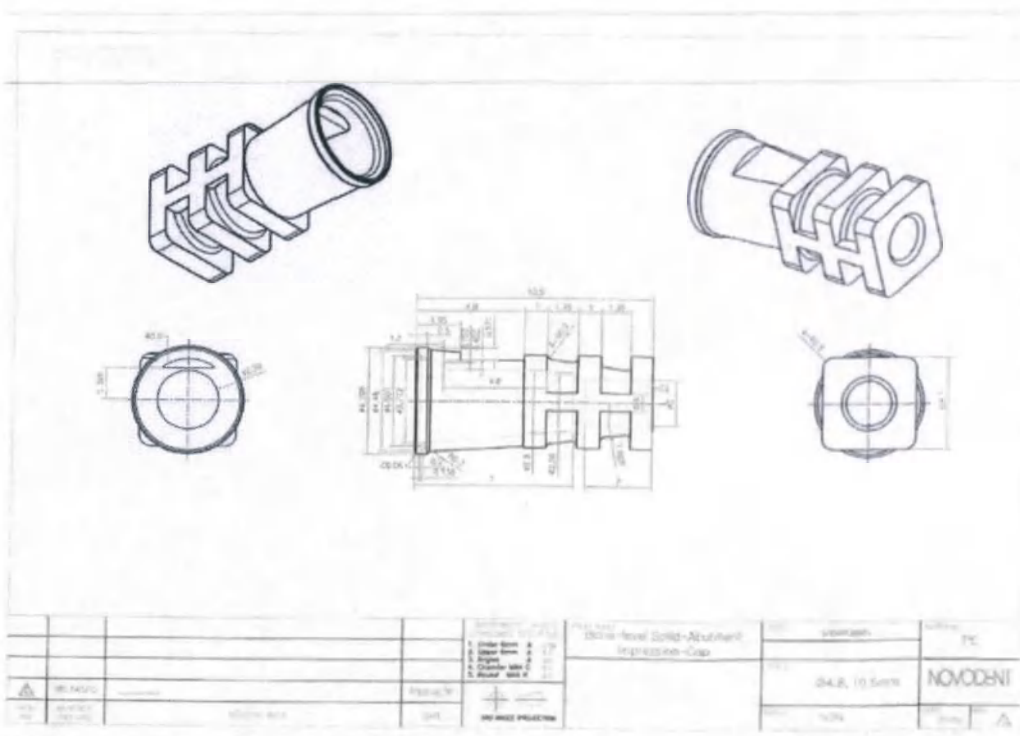Колпачок для снятия слепка Bone Level Solid Abutment Impression Cap (артикул S-BSAICap45)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 215 из 344

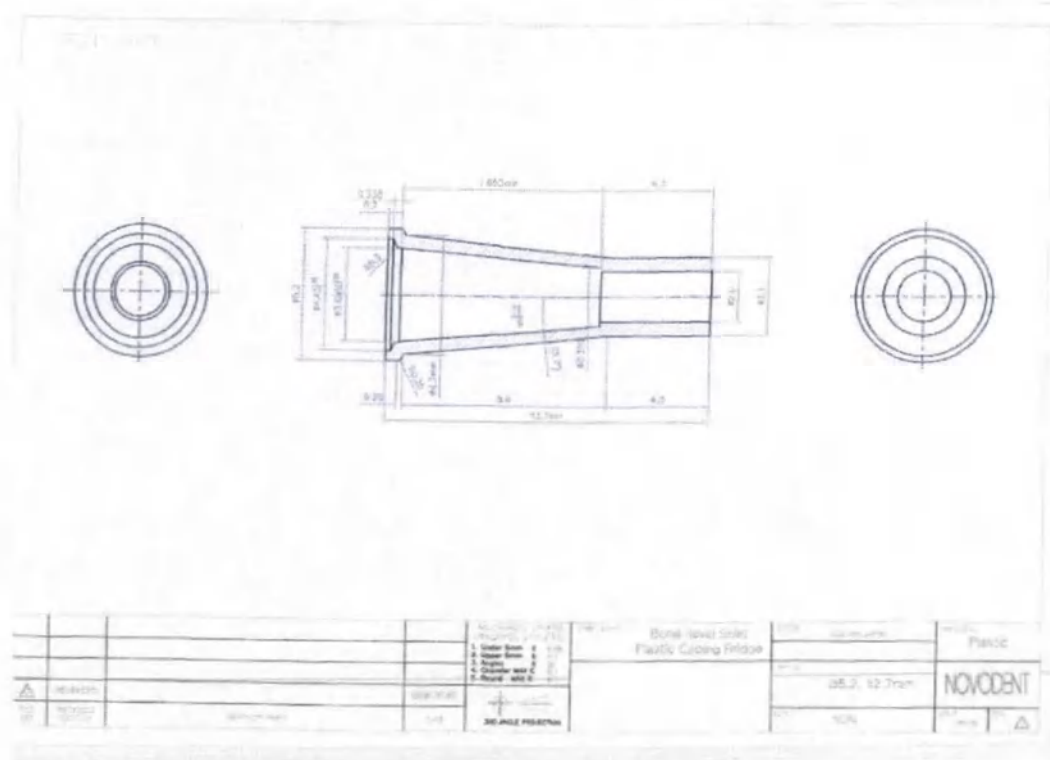
[illegible]

 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


[illegible]

Страница 217 из 344

Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Bridge (артикул S-BSAPIC45b)



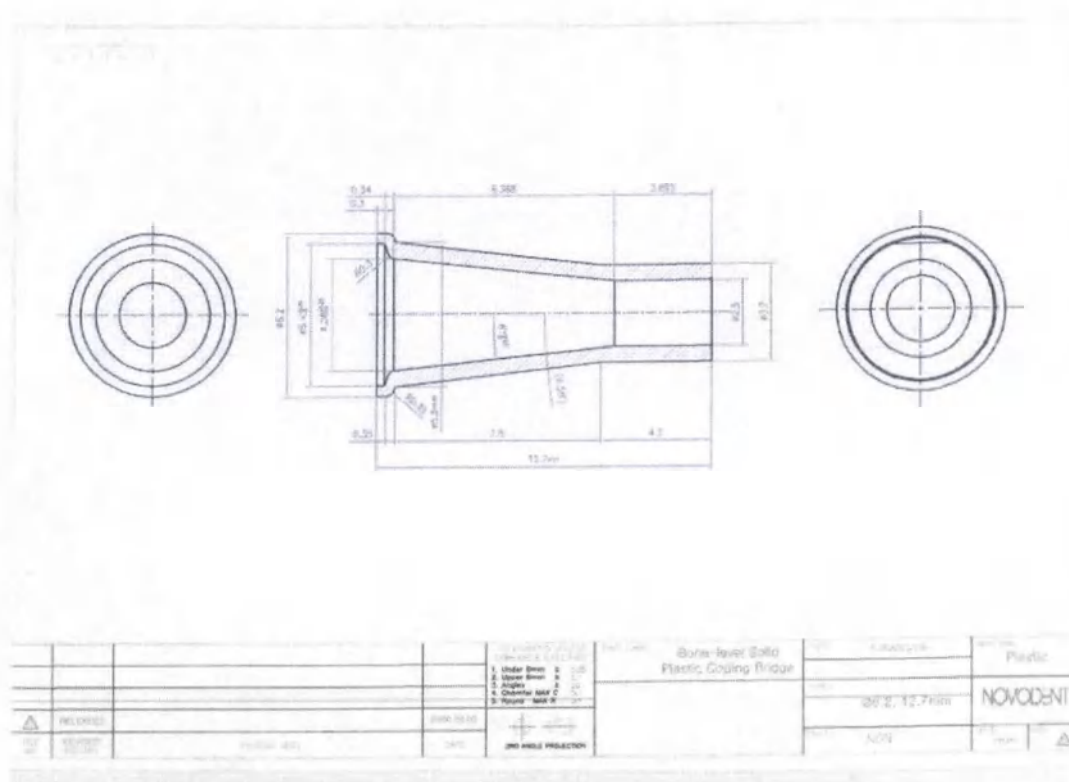Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Bridge (артикул S-BSAPIC55b)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


[illegible]

Technical drawing of a 'Borm level 5x12 Plastic Closing Capset'. The drawing includes a top view, a side elevation, and a cross-section. The side elevation shows a tapered structure with dimensions: top width 11.00 inches, bottom width 12.75 inches, height 4.0 inches, and a central opening of 2.00 inches. The cross-section shows a circular profile with a diameter of 1.4375 inches. The top view shows a circular profile with a diameter of 1.4375 inches. The drawing is labeled 'Borm level 5x12 Plastic Closing Capset' and includes a table with material and quantity information.


Material	Quantity	Unit
Plastic	1	PC
NOVODENT	1	PC

Страница 219 из 344

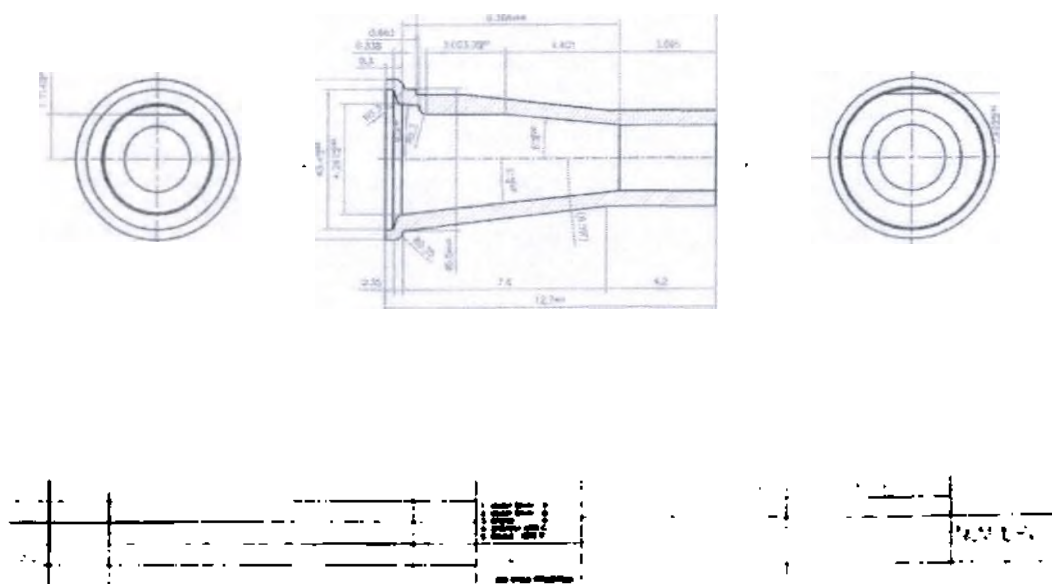Выпускаемый катячок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (артикула S-BSAPIC55c)




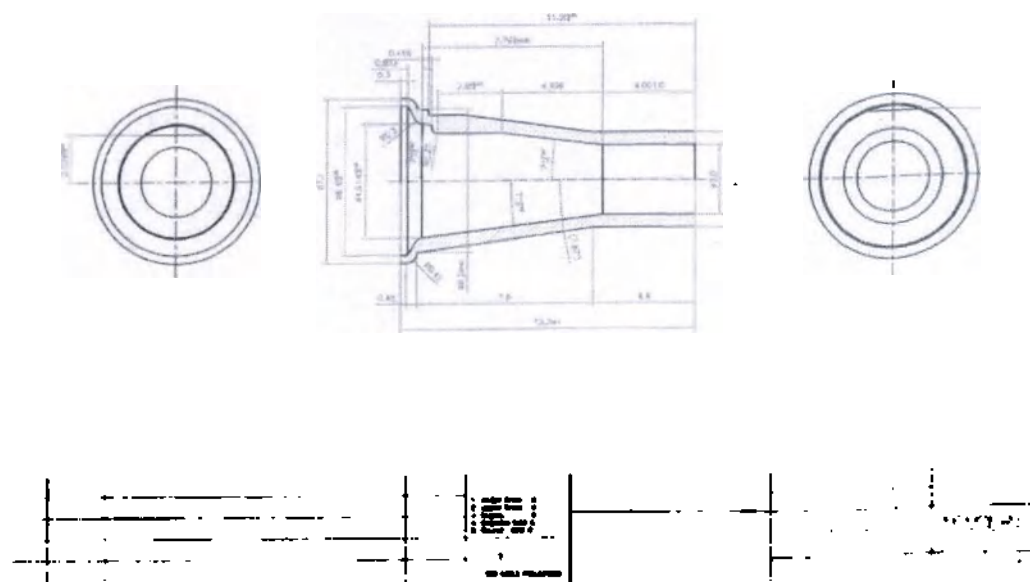
Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (арткул S-BSAPIC65c)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для детальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 220 из 344

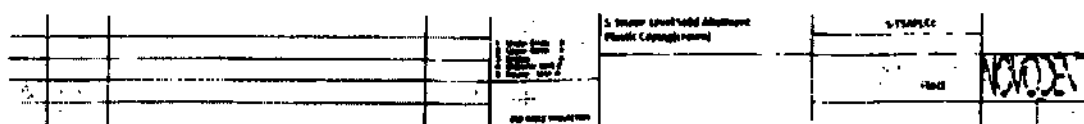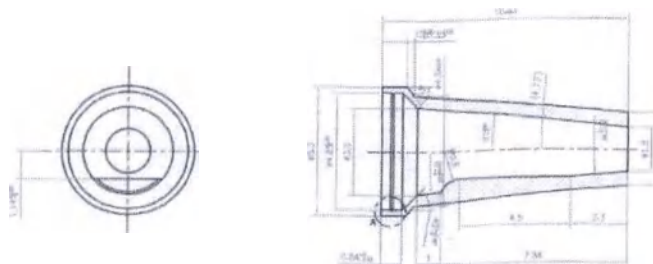Вспыраемый колпачок Tissue Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (арткул S-TSAPICc)




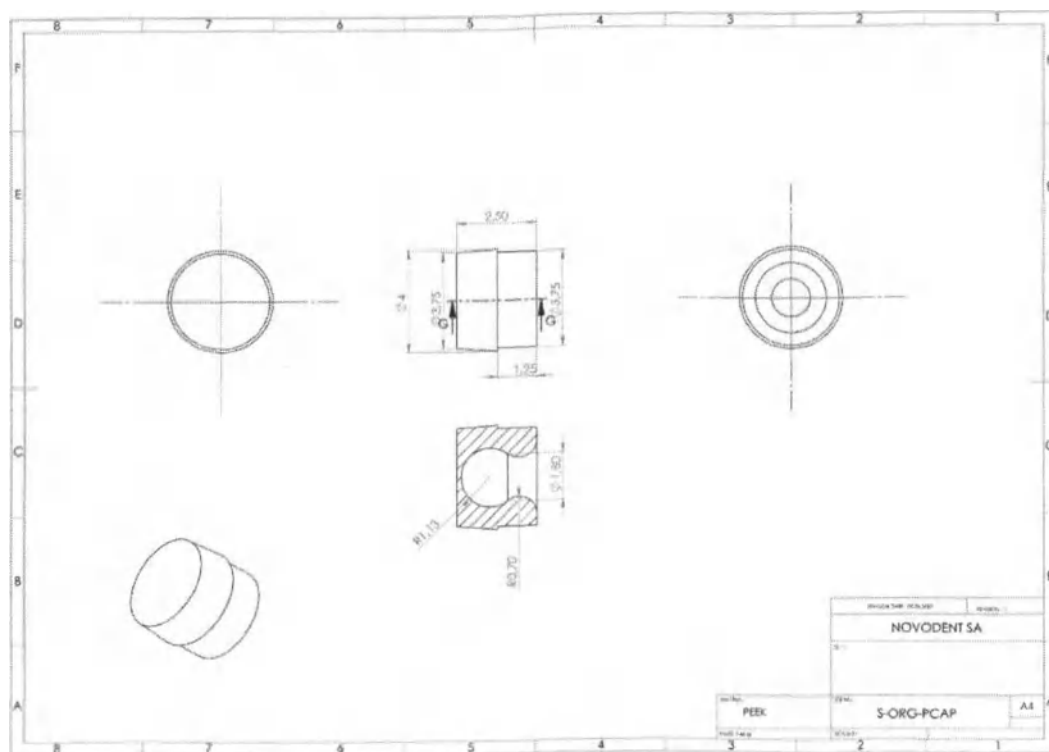Колпачок O-ring Plak Cap (артикул S-ORG-PCap)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

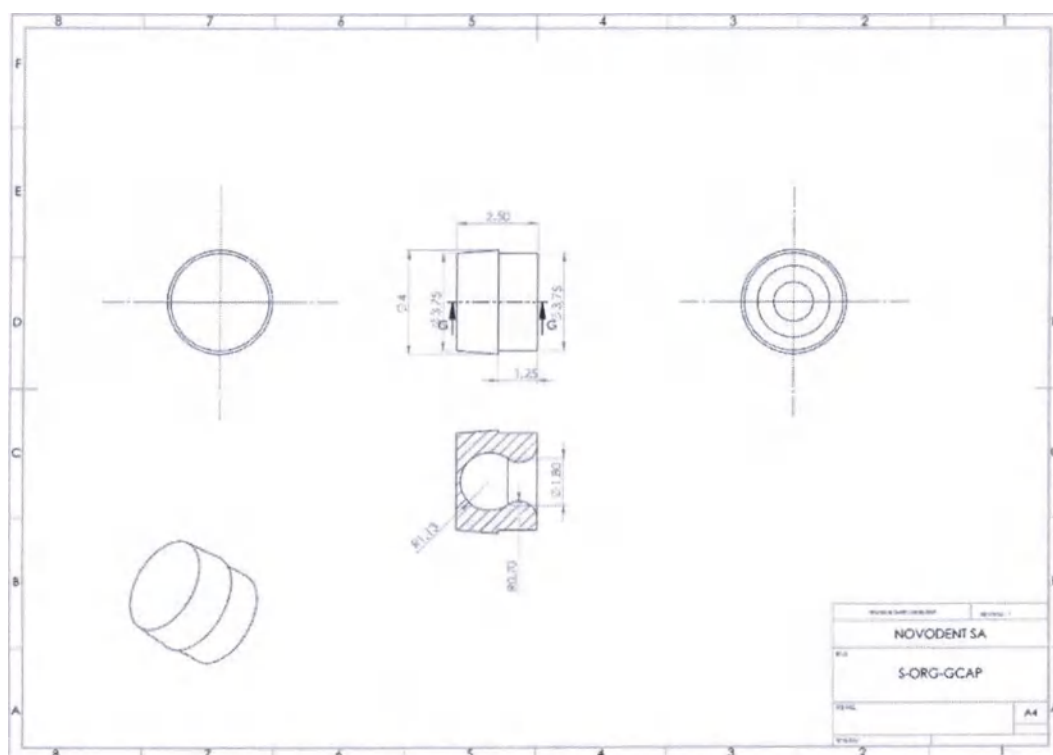Колпачок Oring Green Cap (артикул S-ORG-GCap)




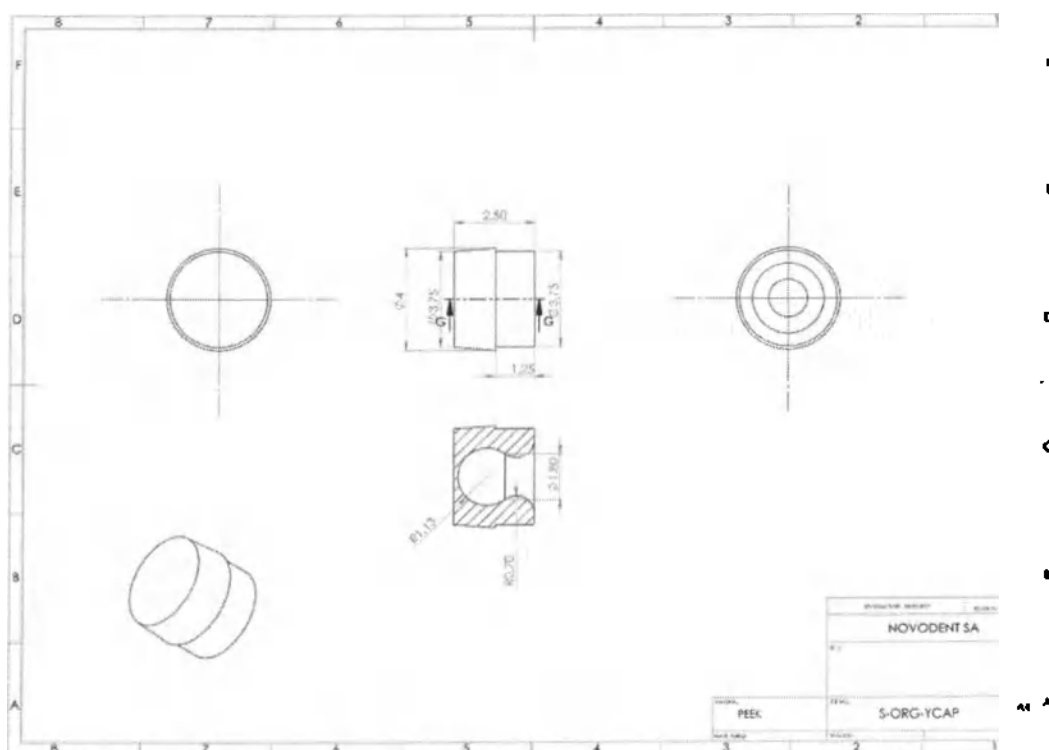Колпачок Oring Yellow Cap (артикул S-ORG-YCap)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

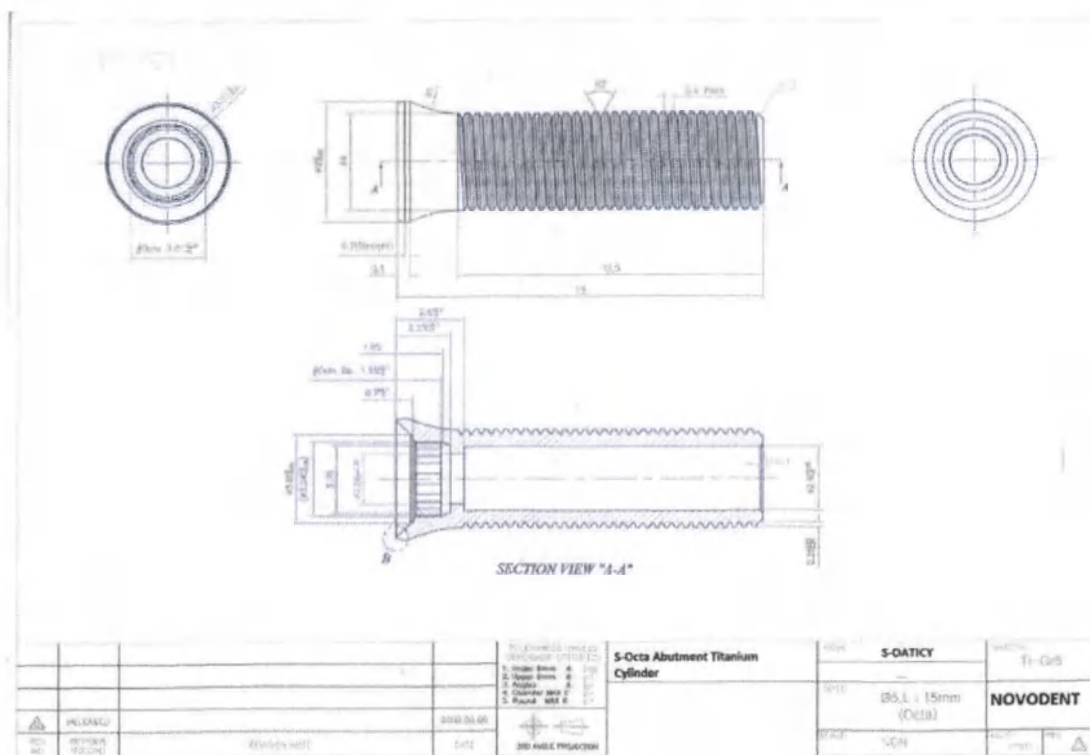Цилиндрический колпачок Octa Abutment Titanium Clinder (артикул S-OATICY)




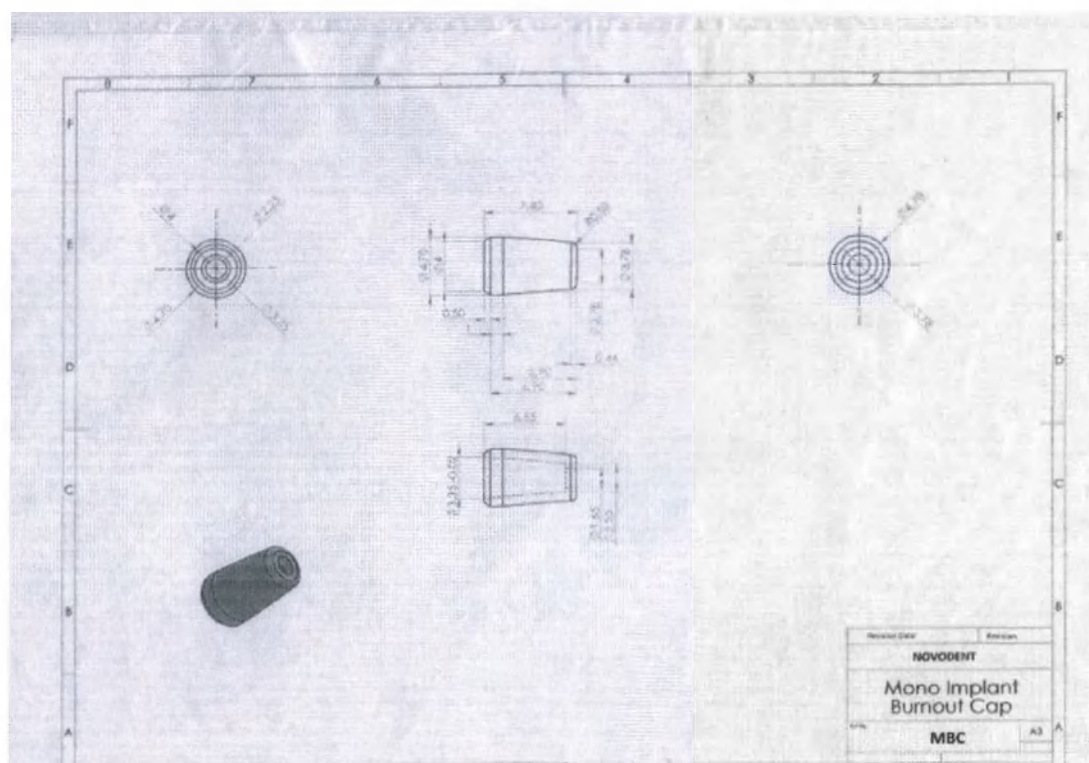Выжигаемый колпачок Mono Implant Burnout Cap (артикул MBC)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

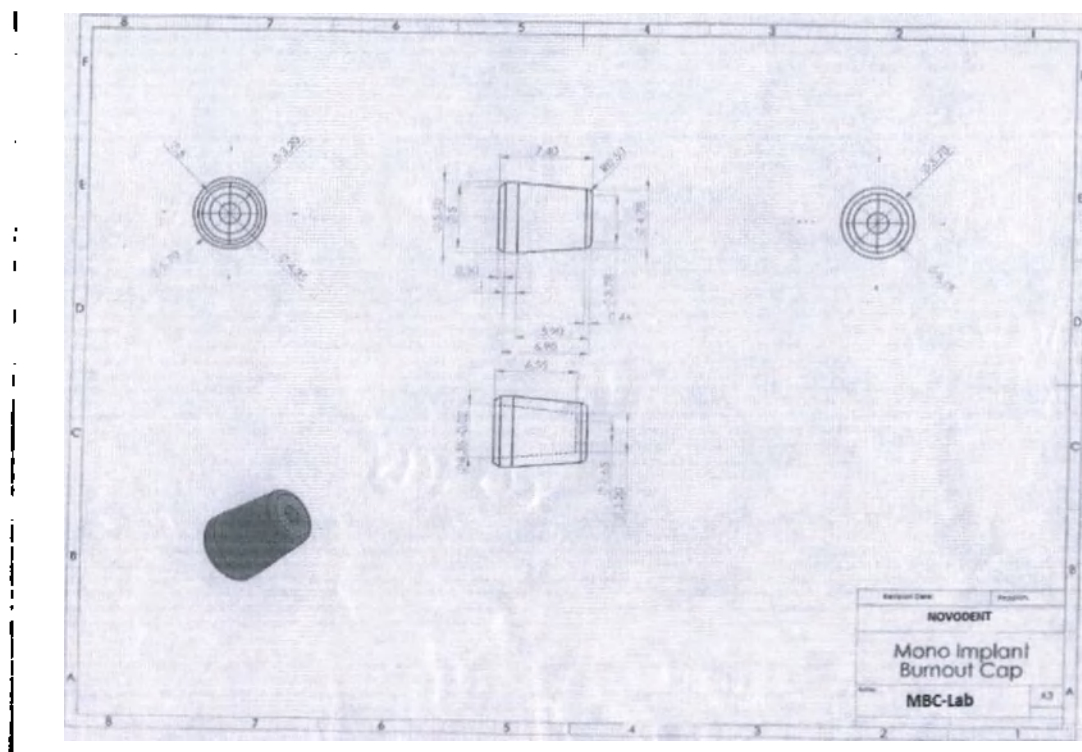Выкидаемый колпачок Mono Implant Burnout Cap (артикул MBC-LAb)



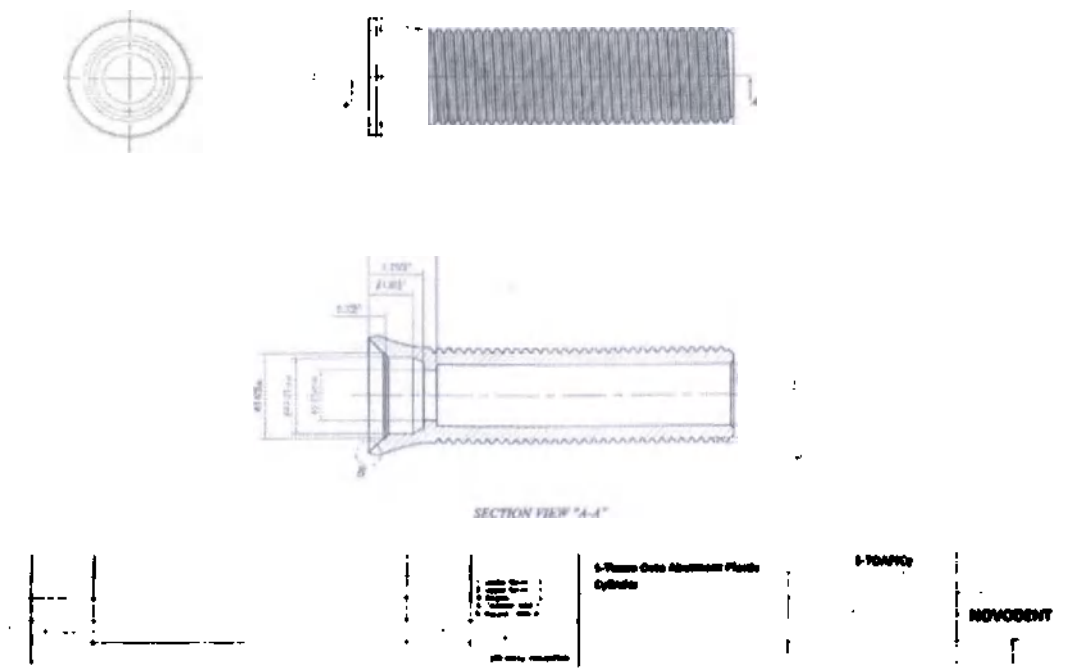
Цилиндрический колпачок Tissue Octa Abutment Plastic Cylinder (артикул S-TOAPICy)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 225 из 344

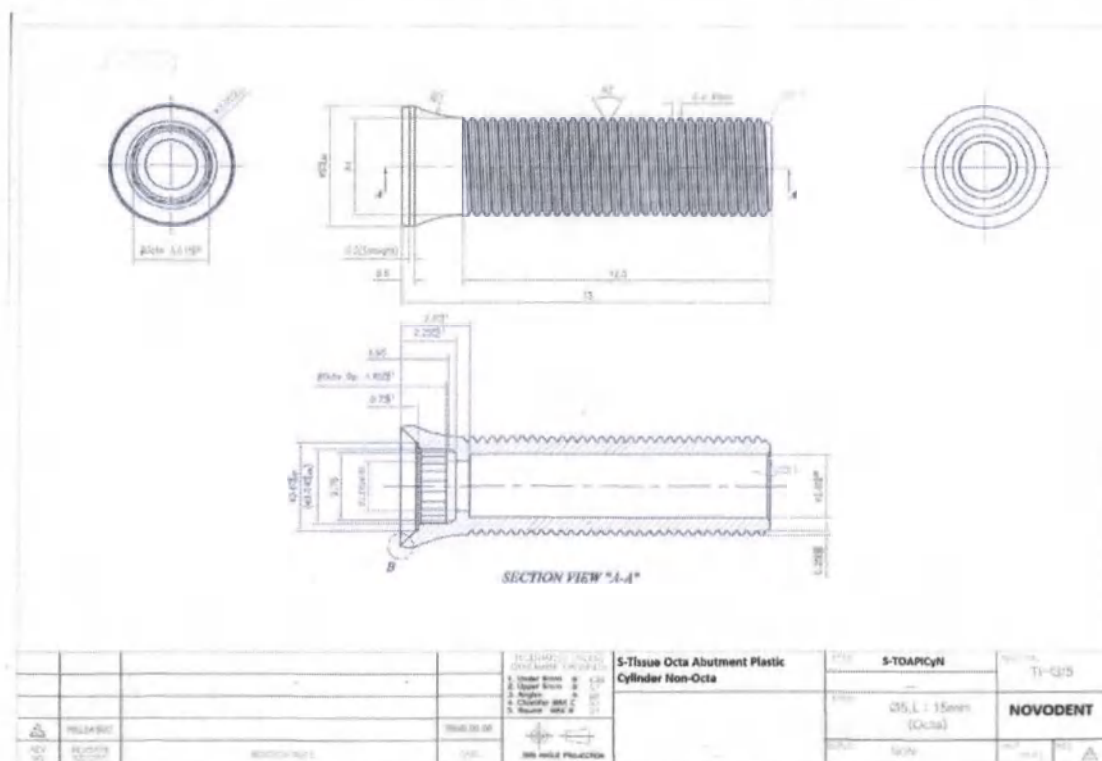Цилиндрический колпачок Tissue Octa Abutment Plastic Cylinder Non-Octa (артикул S-TOAPICyN)




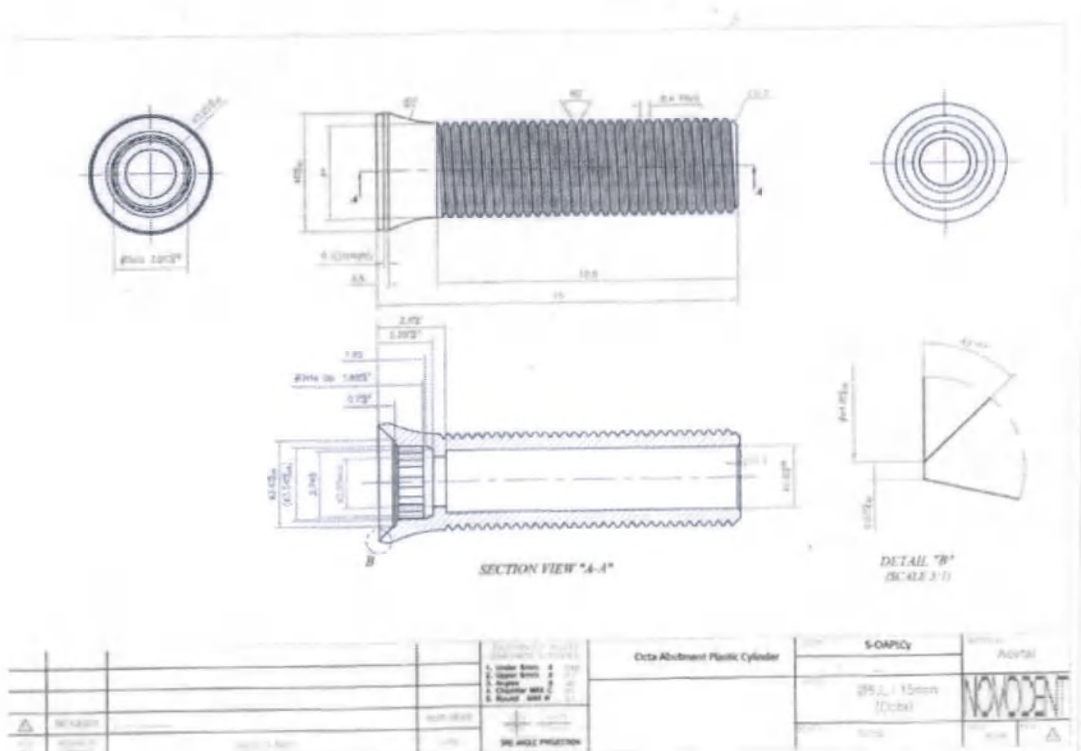Цилиндрический колпачок Octa Abutment Plastic Cylinder (артикул S-OAPICy)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

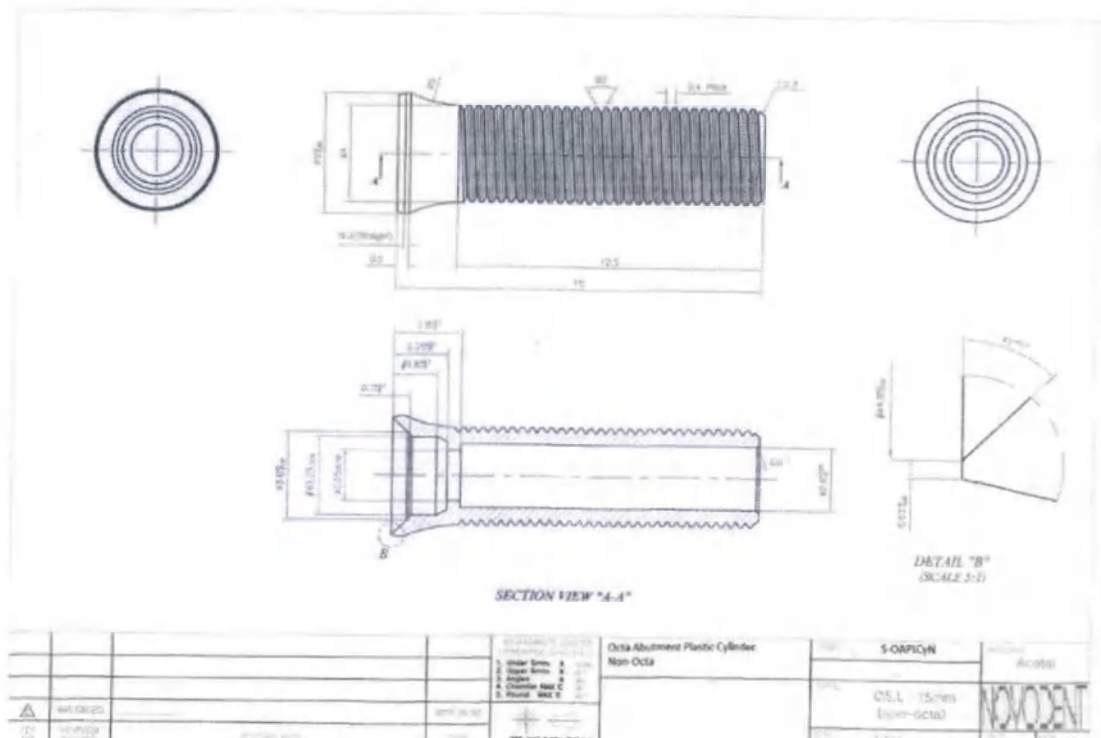Цилиндрический колпачок Octa Abutment Plastic Cylinder Non-Octa (артикул S-OAPICyN)



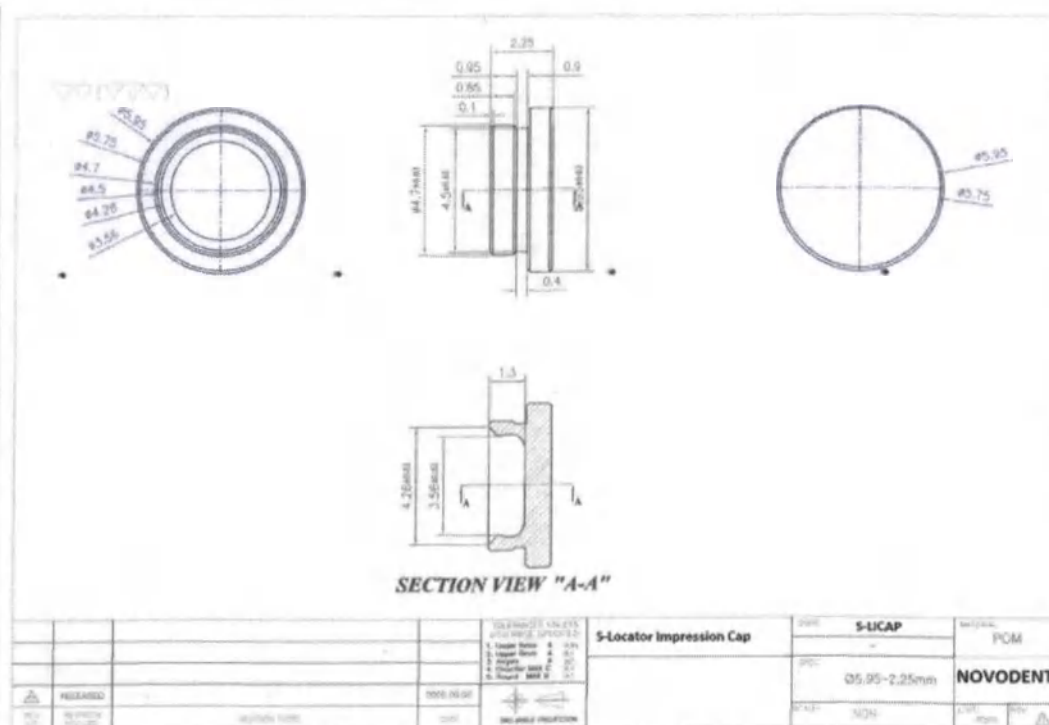Колпачок Locator Impression Cap (артикул S-LICAP)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Колпачок Excellent Ball Impression Cap (артикул S-EBICAP)


Размеры: диаметр 4.80 мм x высота 13.80 мм

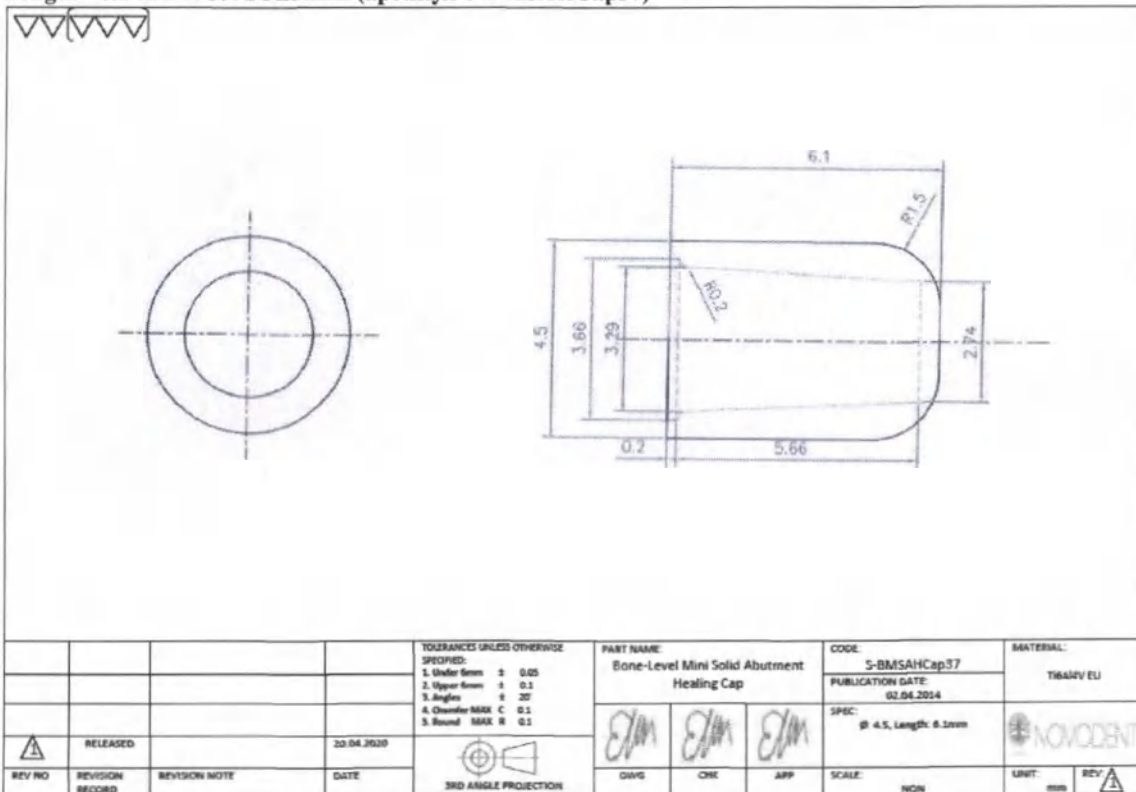Колпачок Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 6.1 mm NON STERILE (артикул S-BMSAHCap37)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

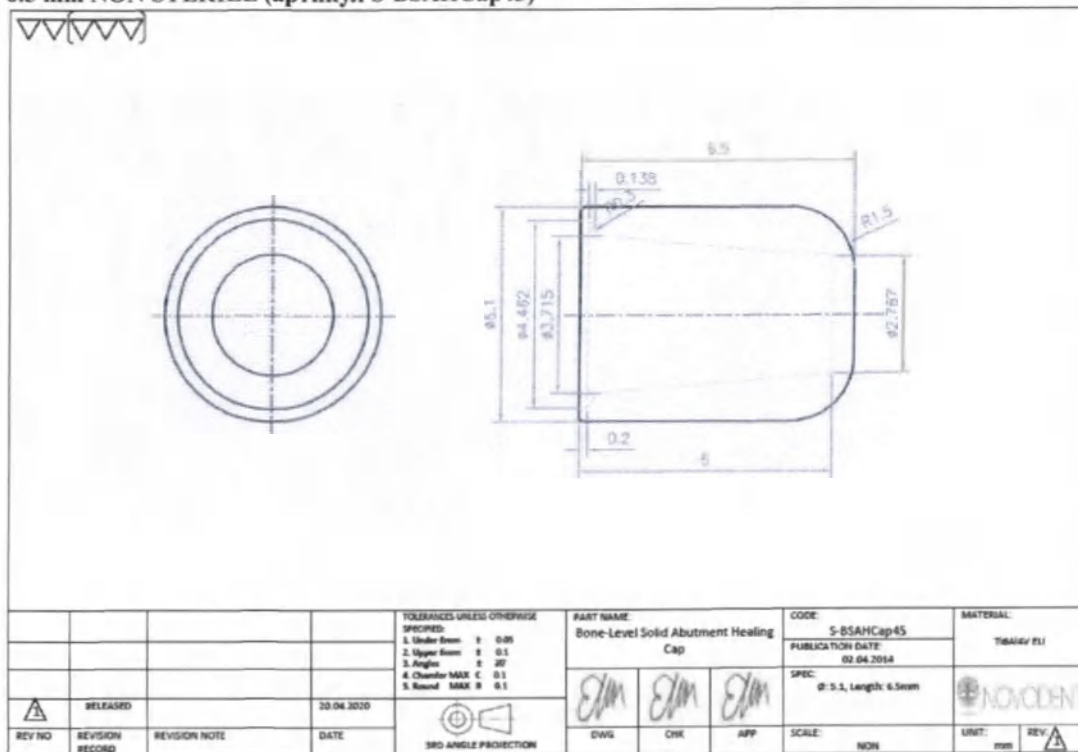Колпачок Implantswiss Bone Level Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 5.1 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BSAHCap45)




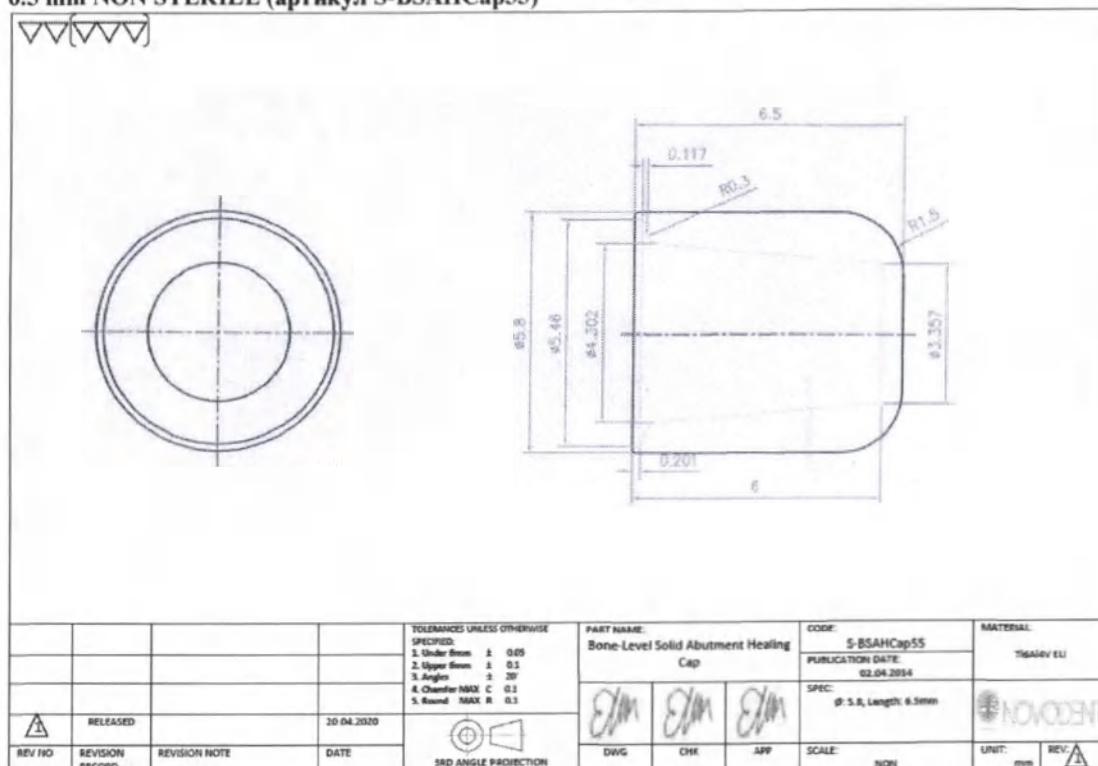Колпачок Implantswiss Bone Level Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 5.8 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BSAHCap55)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

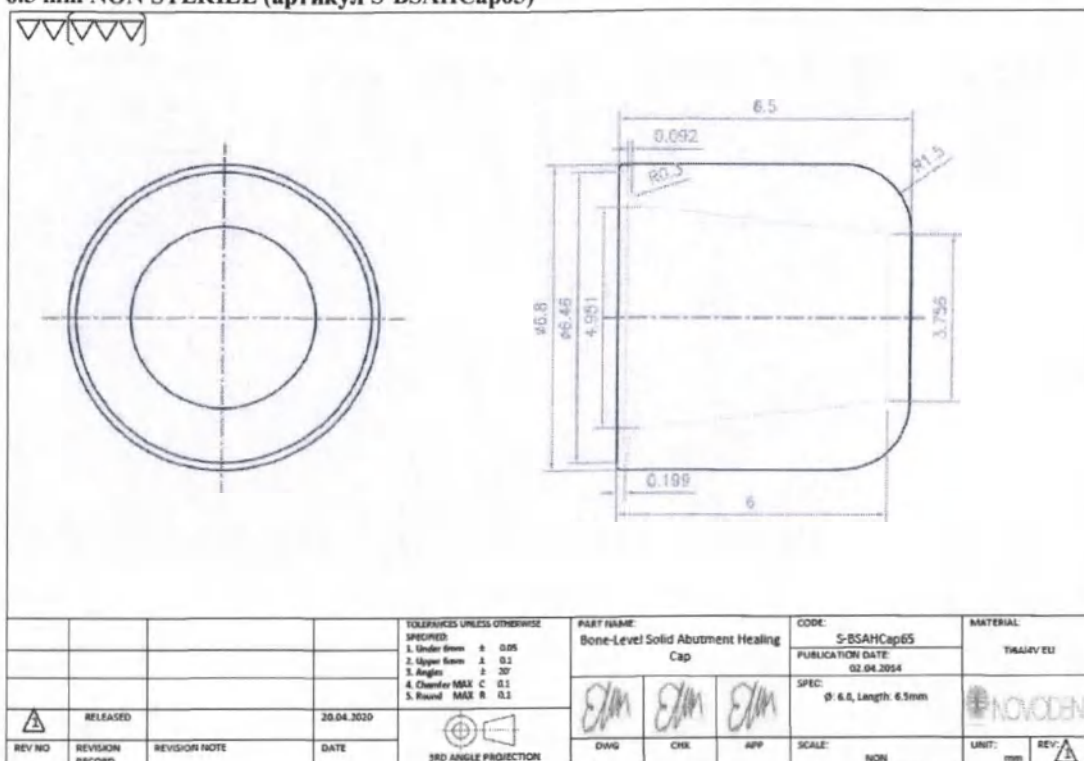Колпачок Implantswiss Bone Level Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 6.8 mm Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BSAHCap65)




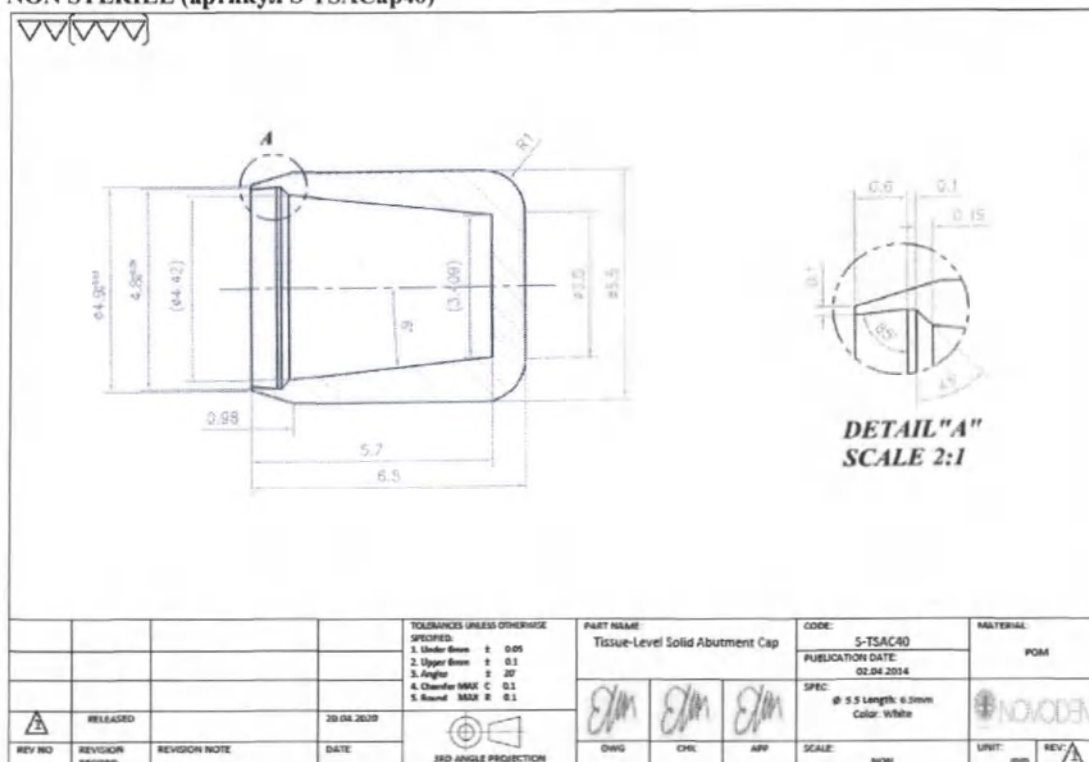Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-TSACap40)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

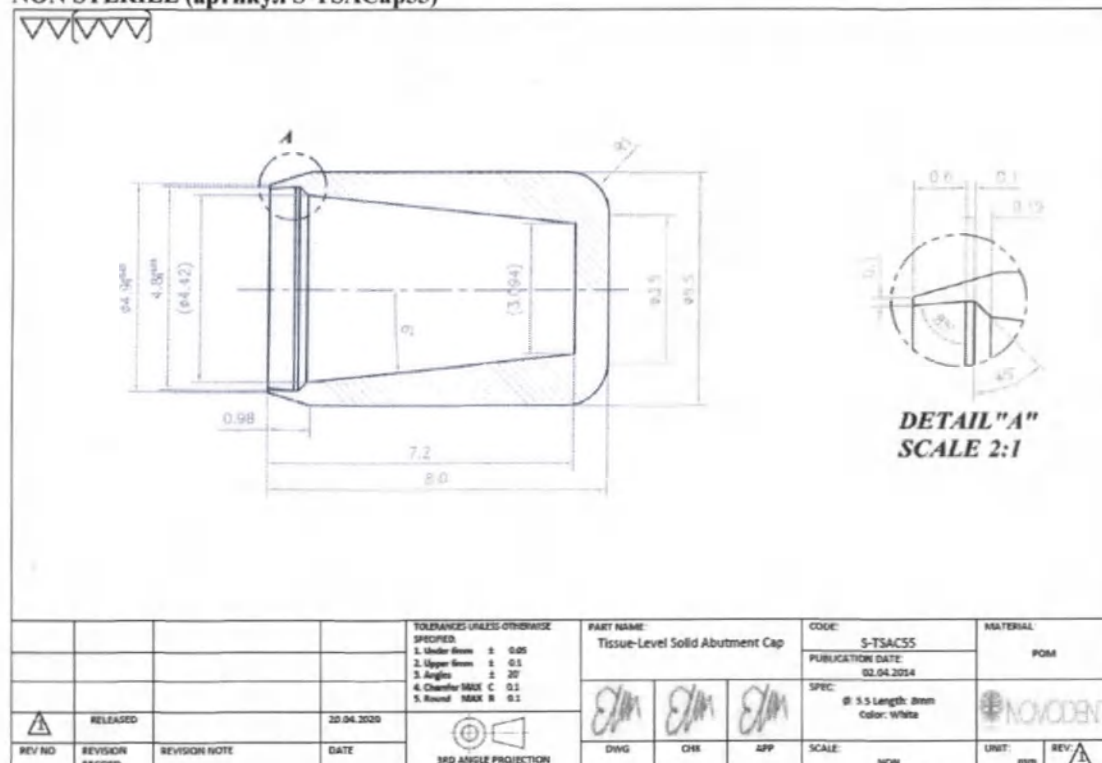**Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 8 mm
NON STERILE (артикул S-TSACap55)**




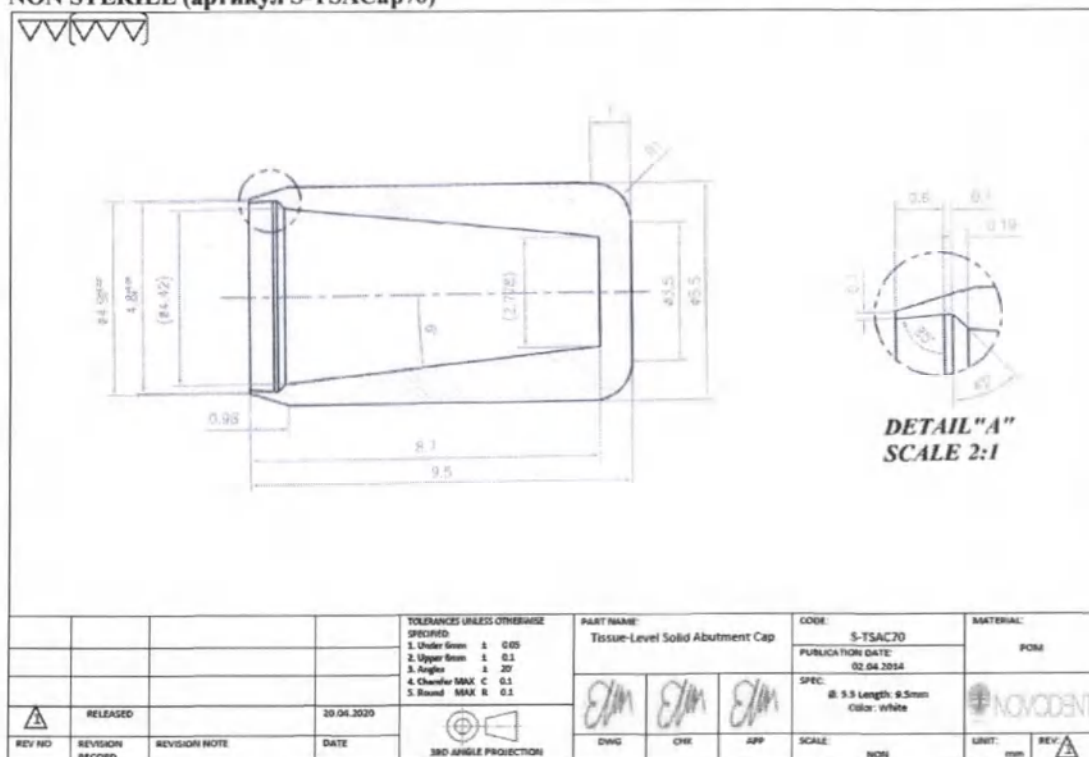**Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 9.5 mm
NON STERILE (артикул S-TSACap70)**




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

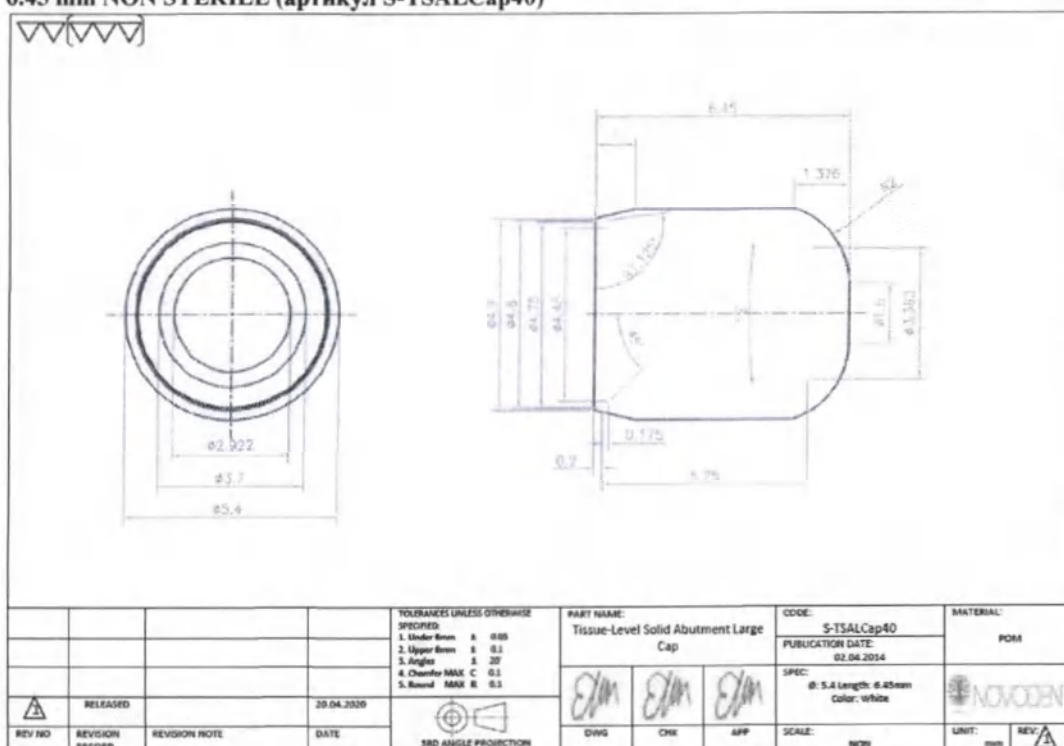Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large Cap, Dimensions: Diameter - 5.4 mm, Length - 6.45 mm NON STERILE (артикул S-TSALCap40)




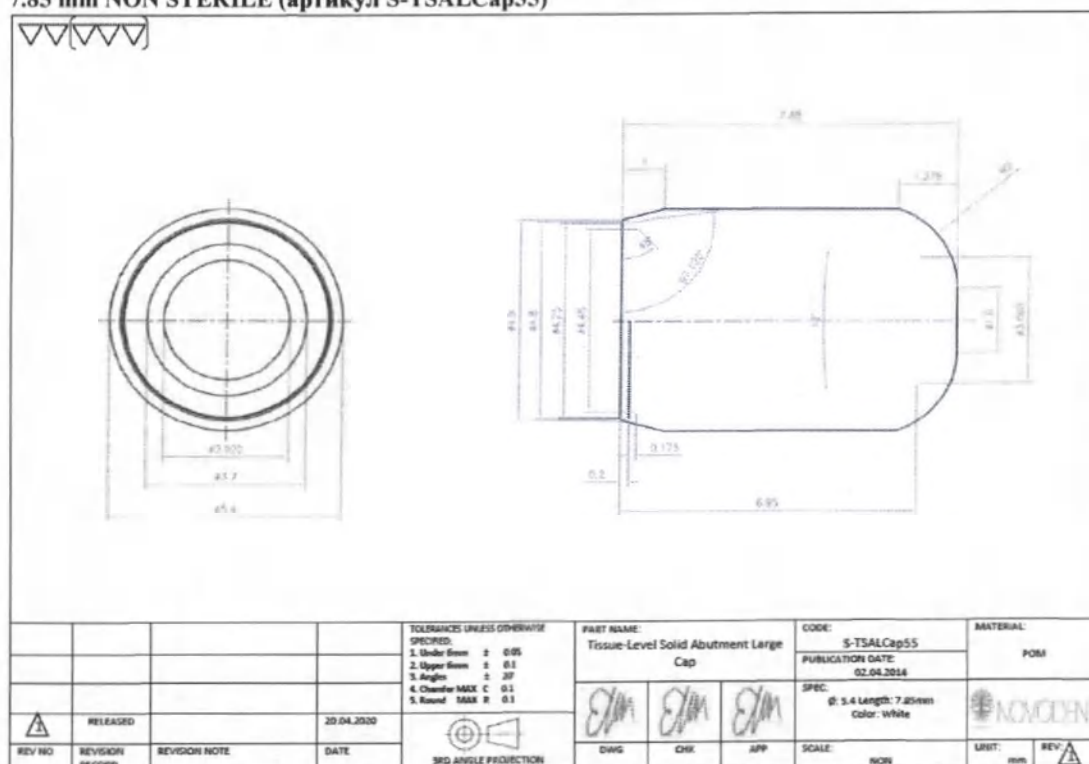Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large Cap, Dimensions: Diameter - 5.4 mm, Length - 7.85 mm NON STERILE (артикул S-TSALCap55)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

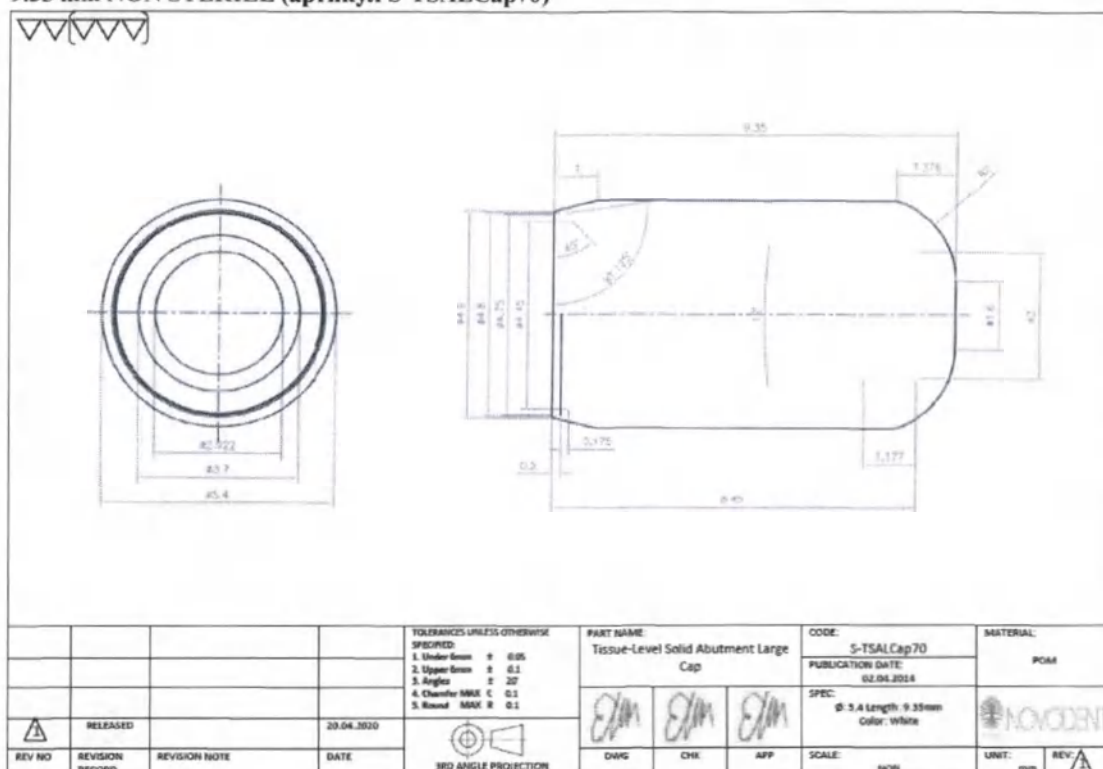Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large Cap, Dimensions: Diameter - 5.4 mm, Length - 9.35 mm NON STERILE (артикул S-TSALCap70)




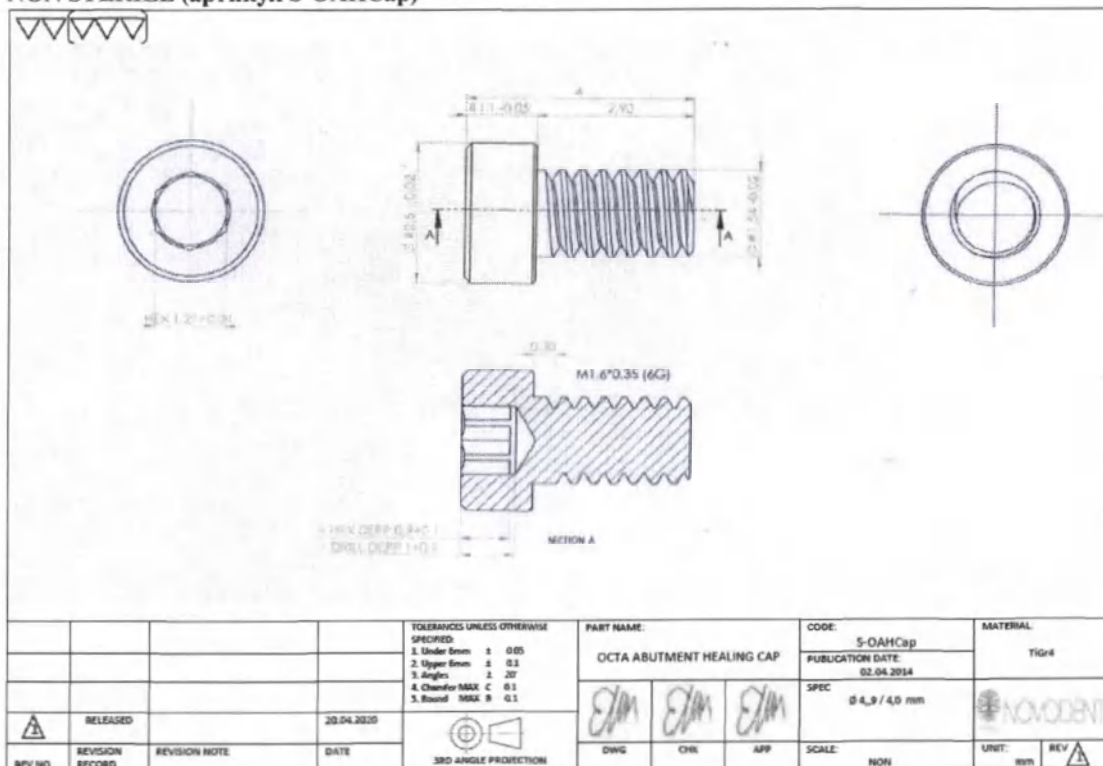Колпачок Implantswiss Octa Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-OAHCap)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

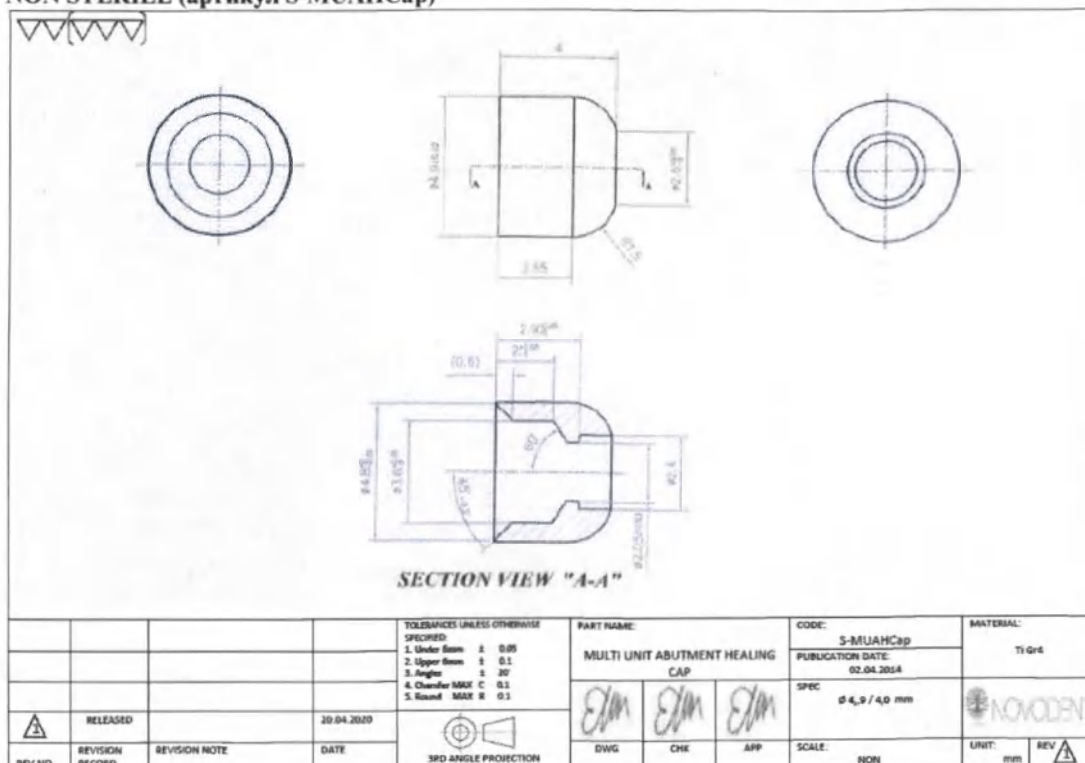**Колпачок Implantswiss Multu Unit Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Length - 4mm
NON STERILE (артикул S-MUAHCap)**




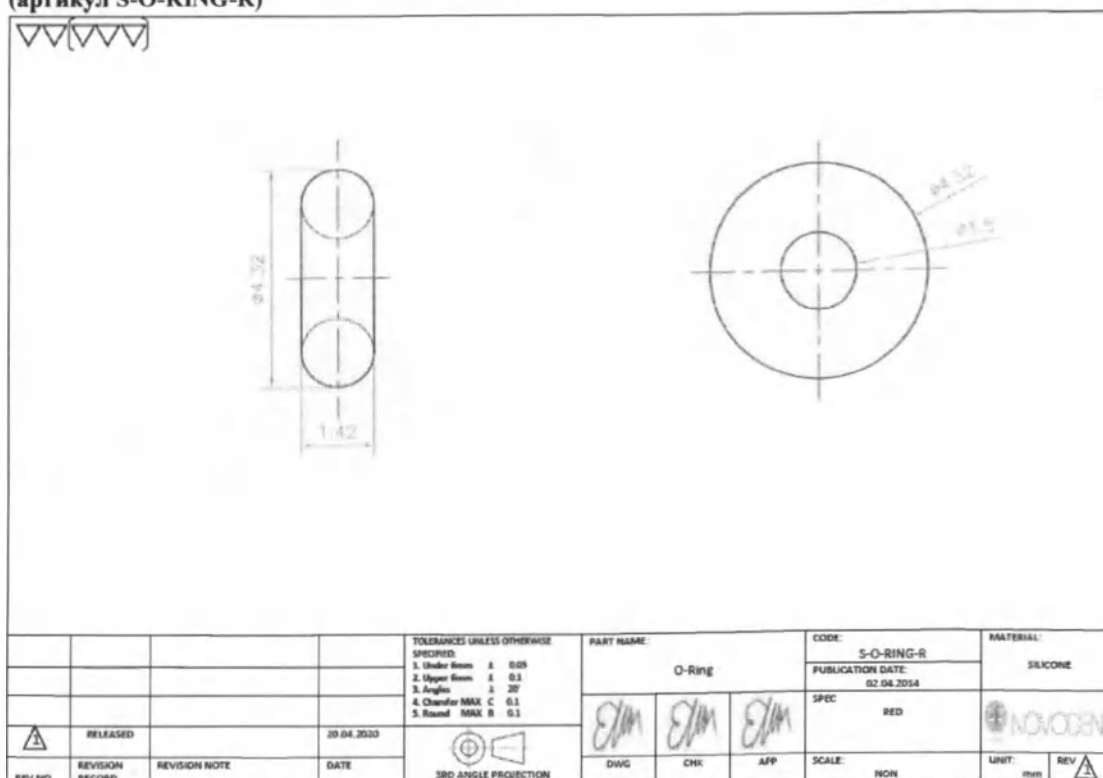**Колпачок Implantswiss O-Ring (red) Dimensions: Length - 1.42 mm, Diameter - 4.32 mm NON STERILE
(артикул S-O-RING-R)**




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

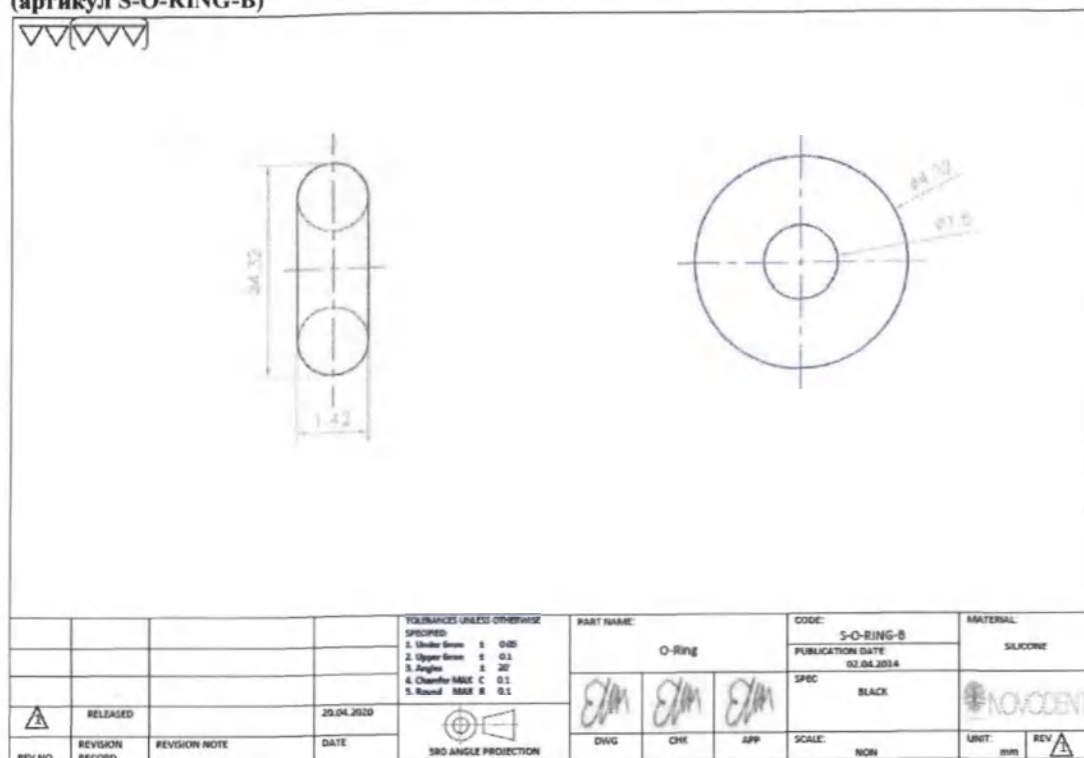Колпачок Implantswiss O-Ring (black) Dimensions: Length - 1.42 mm, Diameter - 4.32 mm NON STERILE (артикул S-O-RING-B)




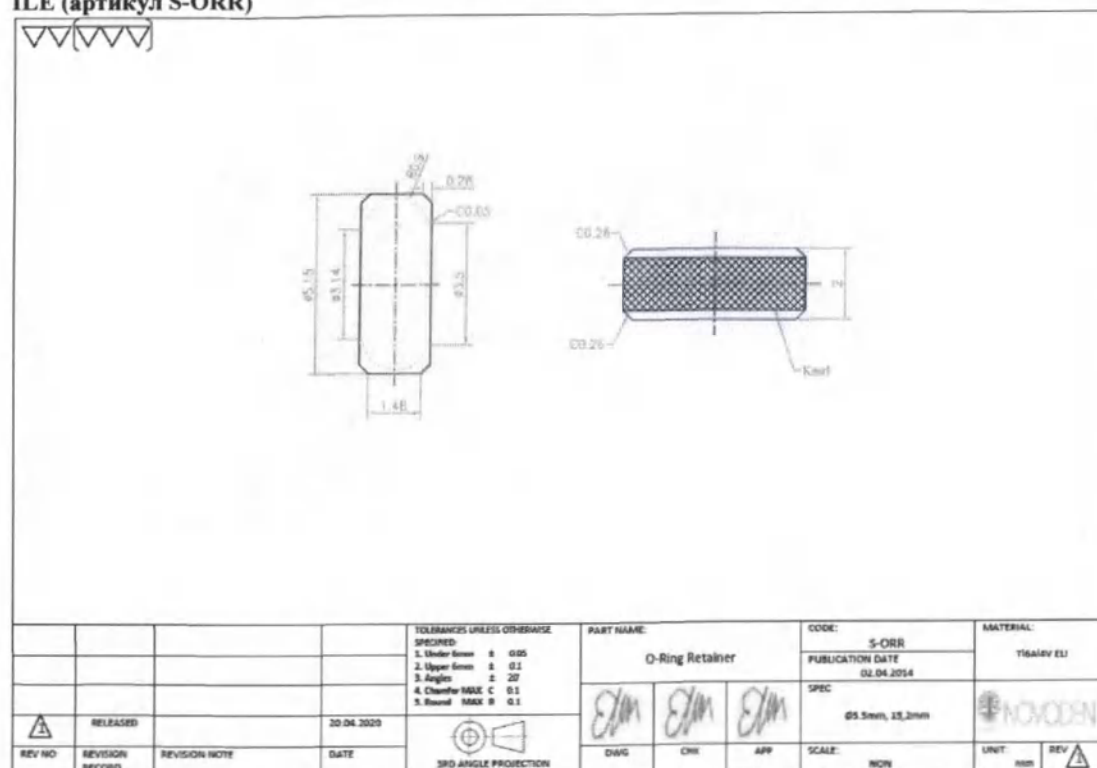Колпачок Implantswiss O-Ring Retainer, Dimensions: Diameter - 5.15 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-ORR)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

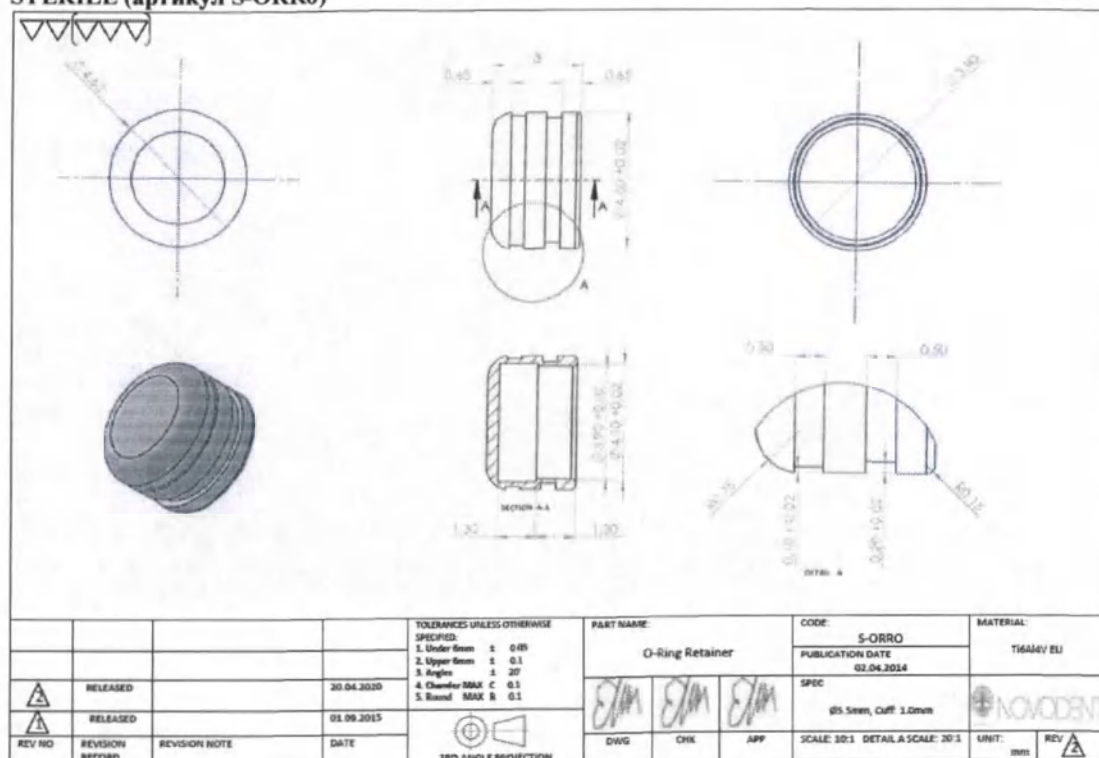Колпачок Implantswiss O-Ring Retainer Open, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-ORRo)




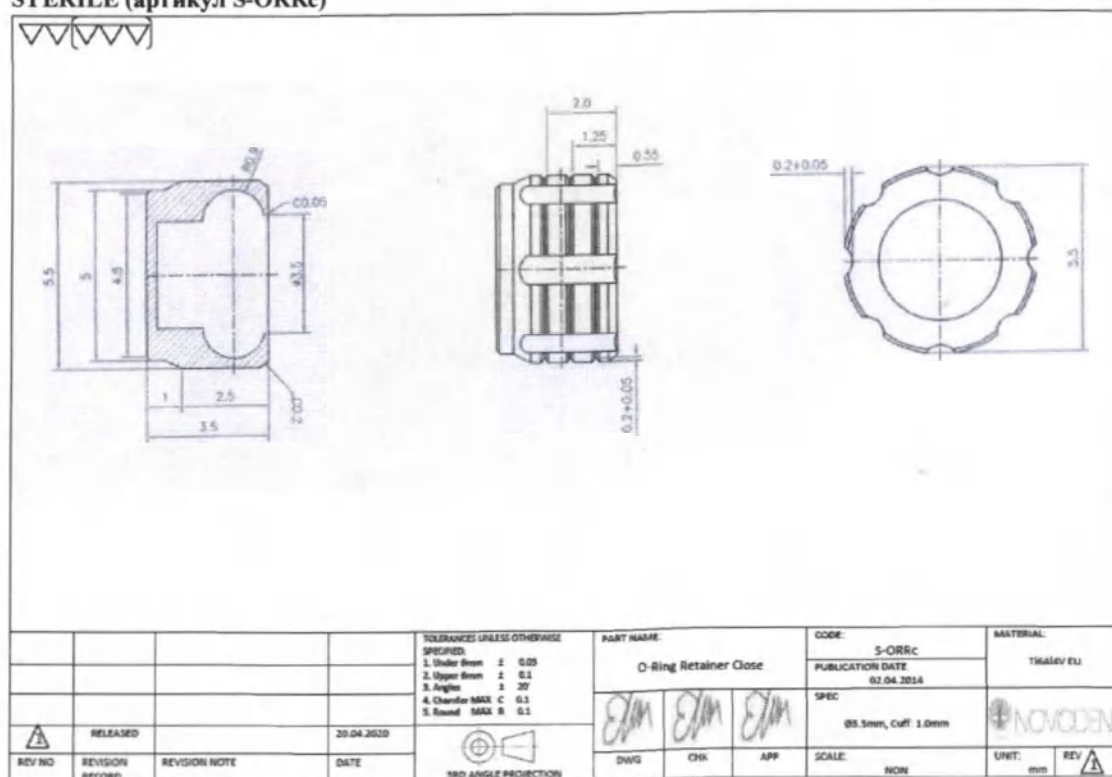Колпачок Implantswiss O-Ring Retainer Closed, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-ORRc)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

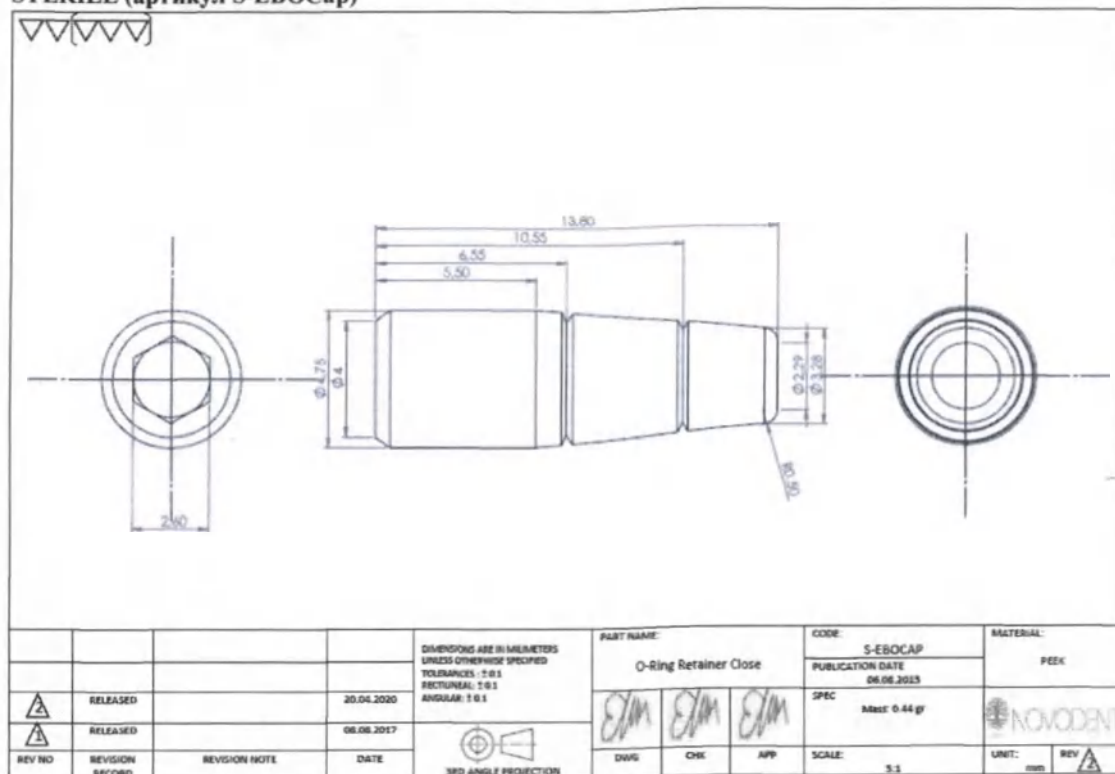Колпачок Implantswiss Superb Overdenture Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-EBOCap)




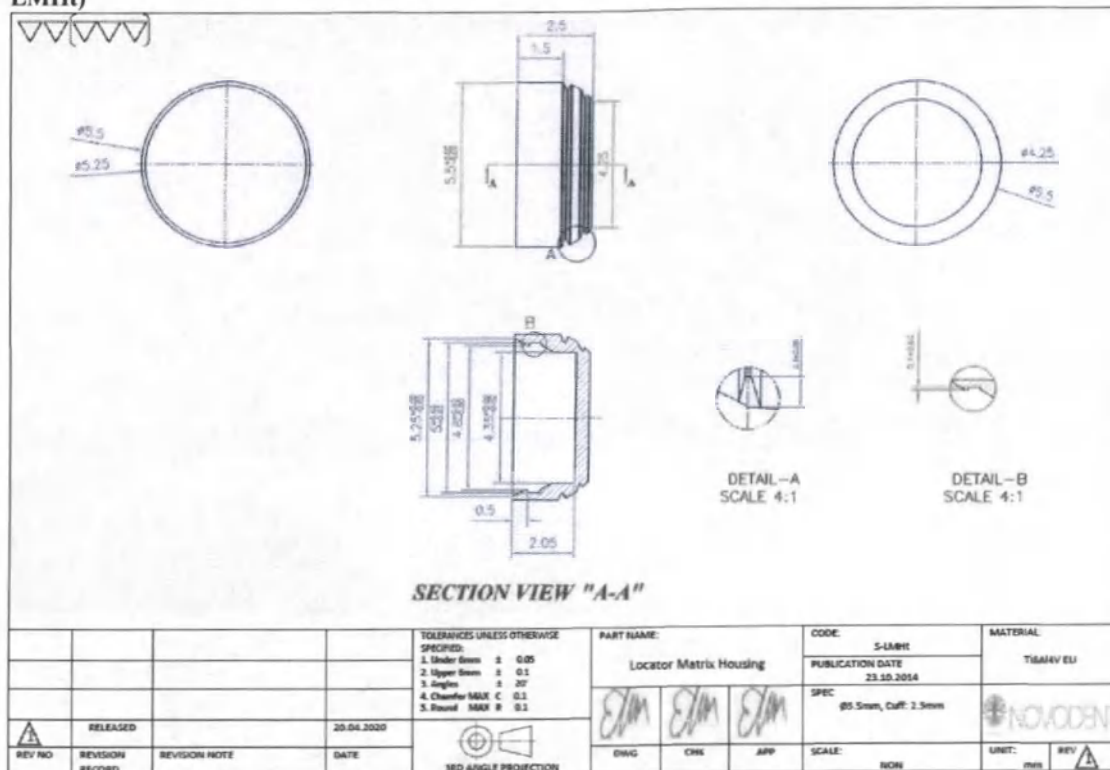Колпачок Implantswiss Matrix Housing, Dimensions: Diameter - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-LMHt)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

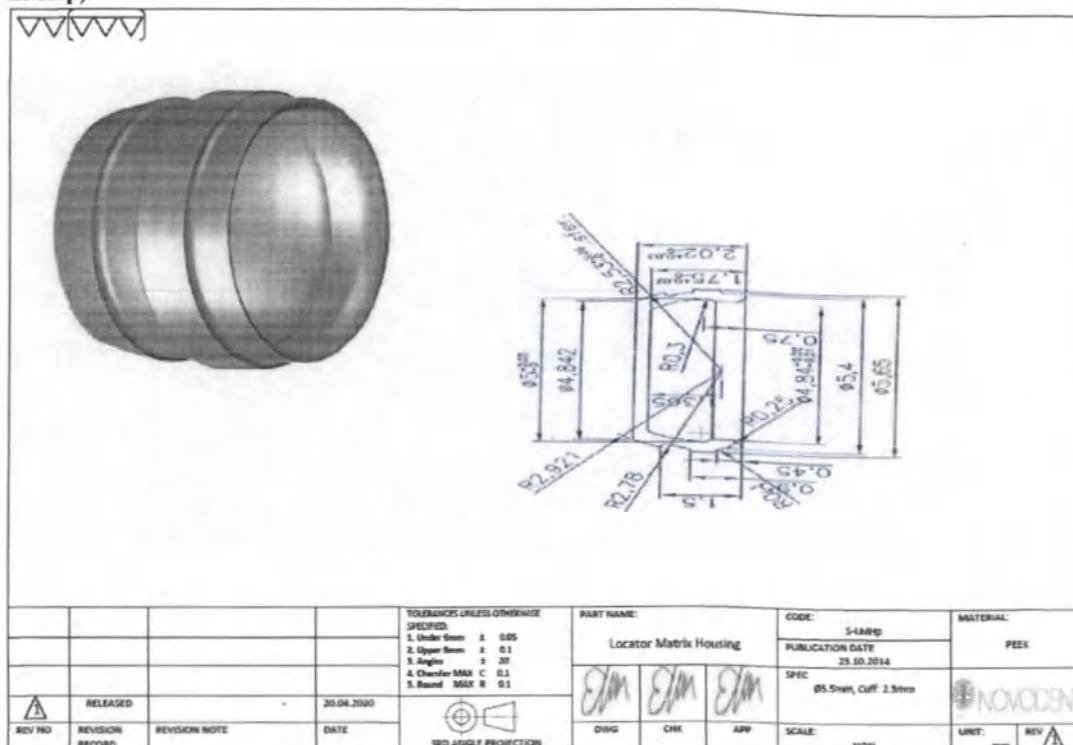Колпачок Implantswiss Matrix Housing, Dimensions: , Diameter - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-LMHP)



Колпачок Implantswiss Retention Insert Yellow, Dimensions: Diameter - 4.86 mm NON STERILE (артикул S-LRI-y),

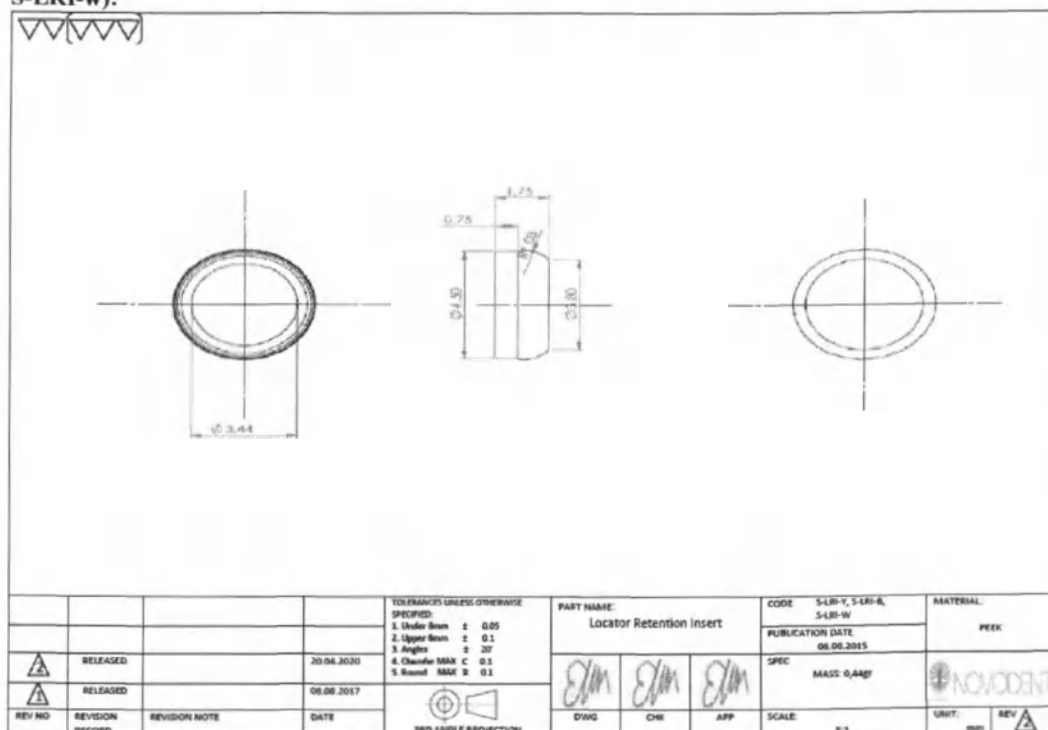
Колпачок Implantswiss Retention Insert Blue, Dimensions: Diameter - 4.86 mm NON STERILE (артикул S-LRI-b),

Колпачок Implantswiss Retention Insert White, Dimensions: Diameter - 4.86 mm NON STERILE (артикул S-LRI-w)


Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 238 из 344

S-LRI-w):




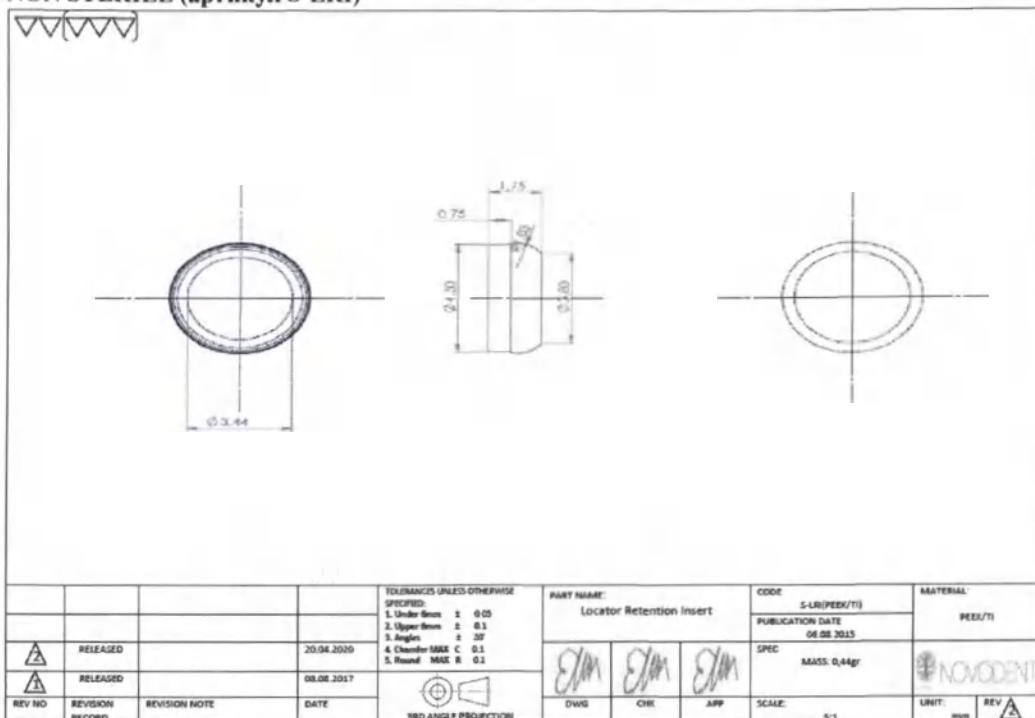5.51 Колпачок Implantswiss Retention Insert, Dimensions: Diameter - 4.86 mm, Material: PEEK./Ti NON STERILE (артикул S-LRI)



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

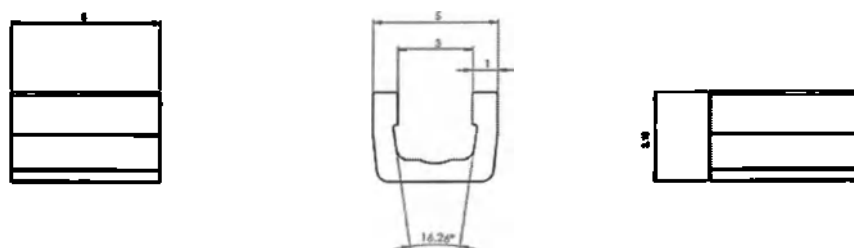
6. Балки:



Размеры: высота 3.15 мм x длина 5 мм


Балка Bar Positioning (артикул S-IBP)

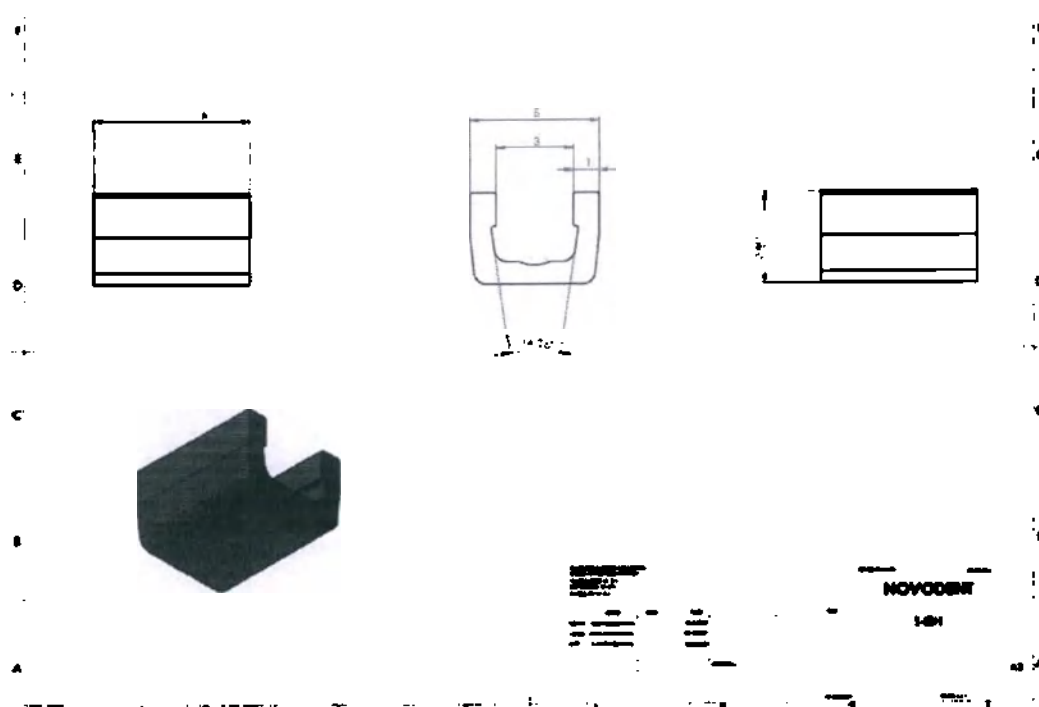Балка Bar Housing (артикул S-IBH)




Балка Bar Clip Yellow (артикул S-IBClip-y),
Балка Bar Clip Pink (артикул S-IBClip-p),

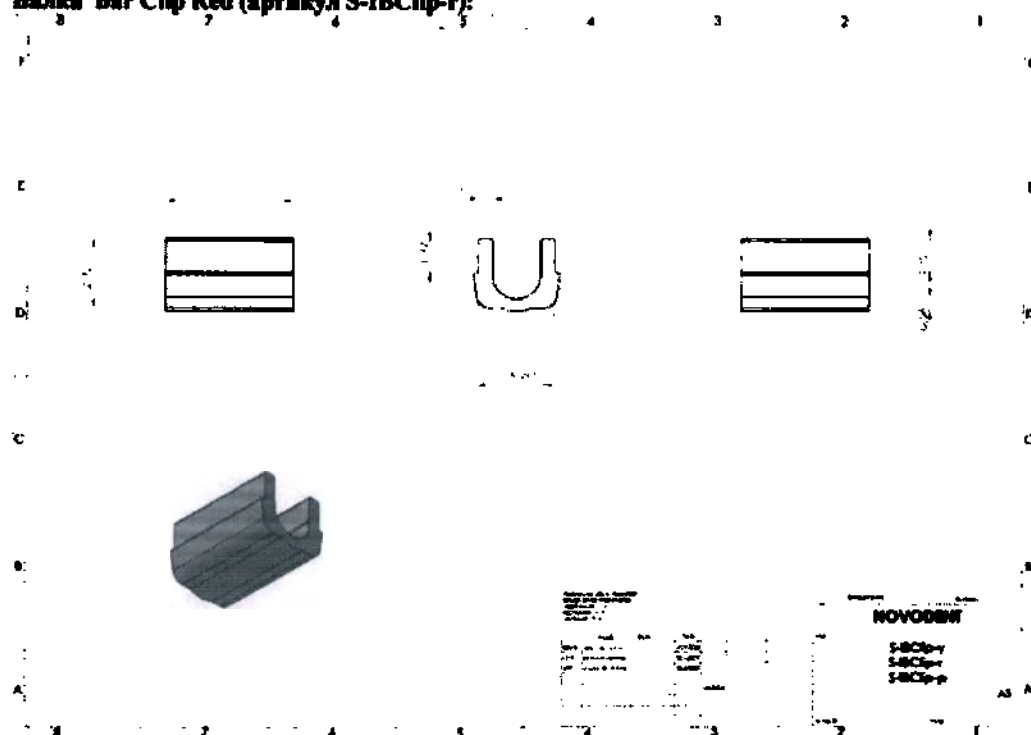Балка Bar Clip Red (артикул S-IBClip-r):



Балка Bar Burnout (артикул S-IB)

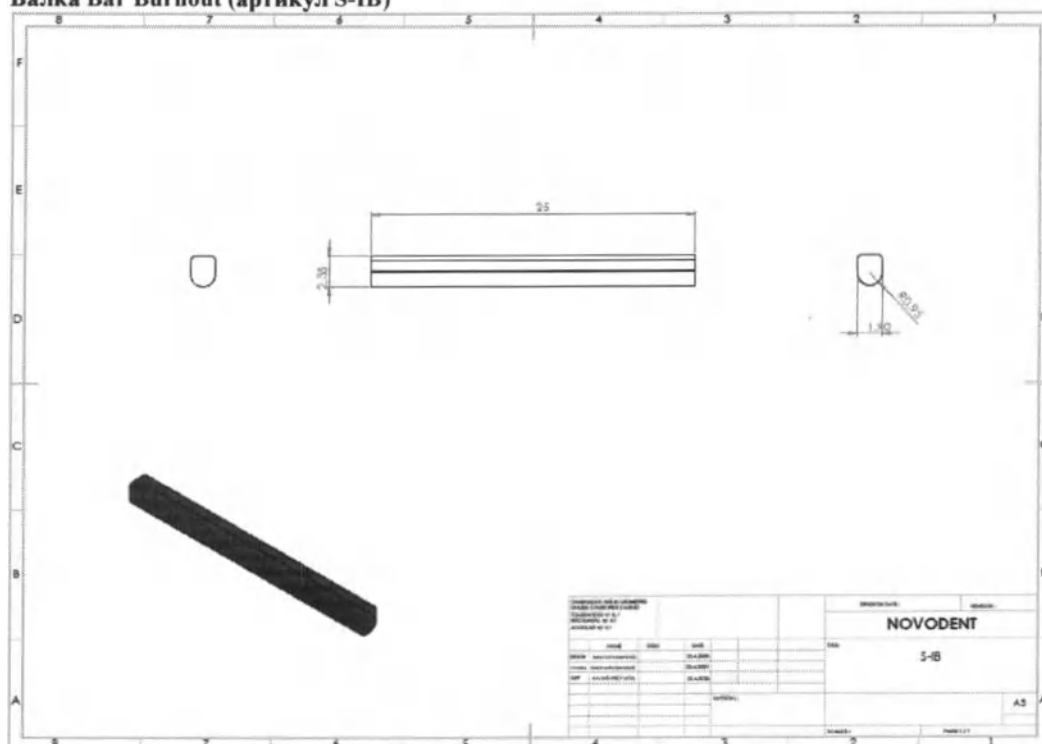


Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 241 из 344

7. ВИНТЫ

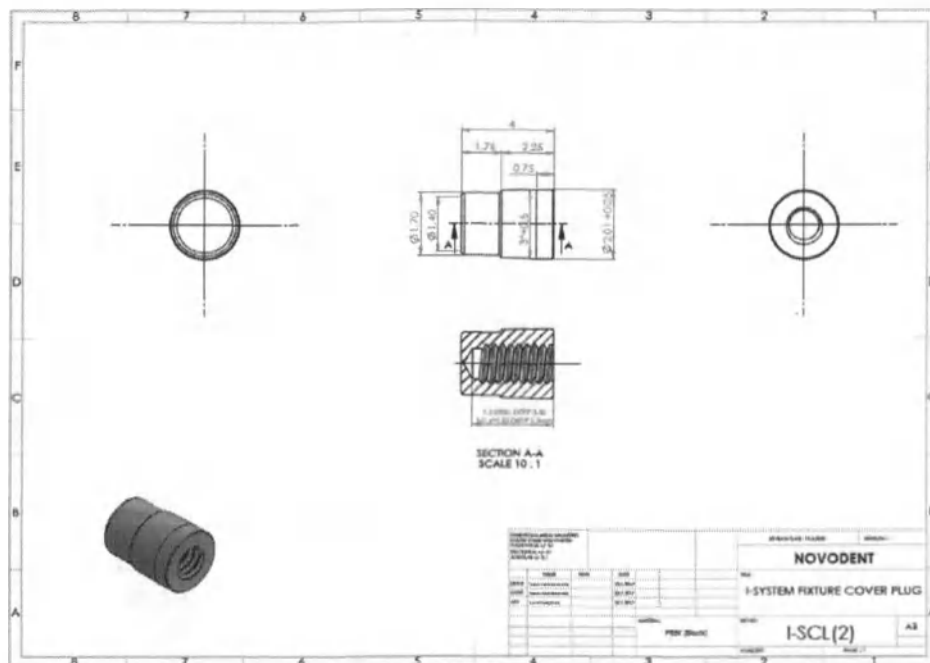Винт I-System Fixture Cover Plug, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm STERILE (артикул I-SCL)




**Винт I-System Implant Driver, STERILE (I-SFD(2)),
Винт I-System Implant Driver, STERILE (I-SFD(2.5)),
Винт I-System Implant Driver, STERILE (I-SFD(3)):**

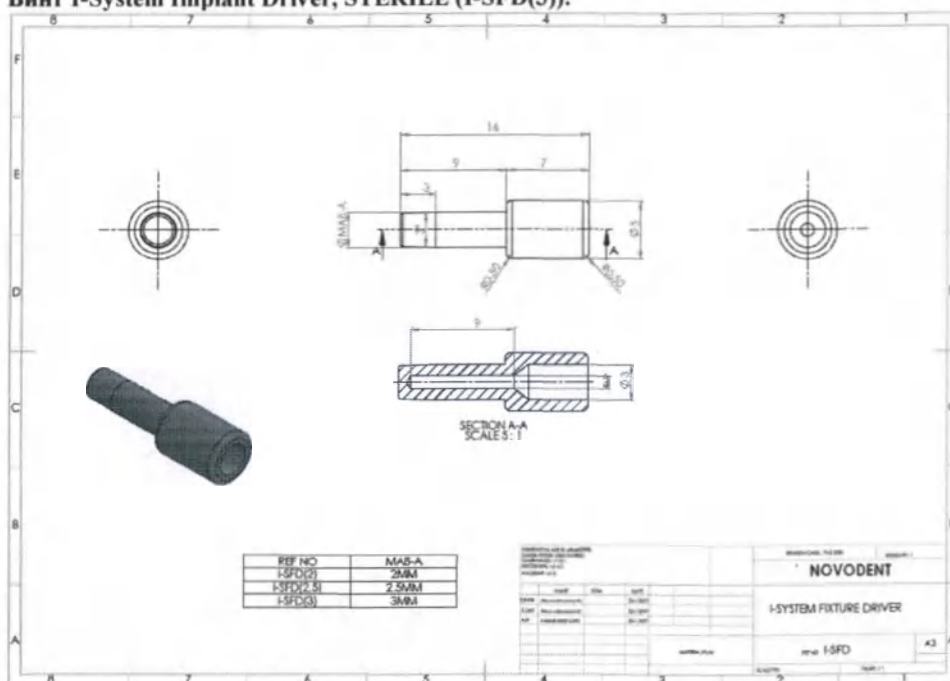


Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

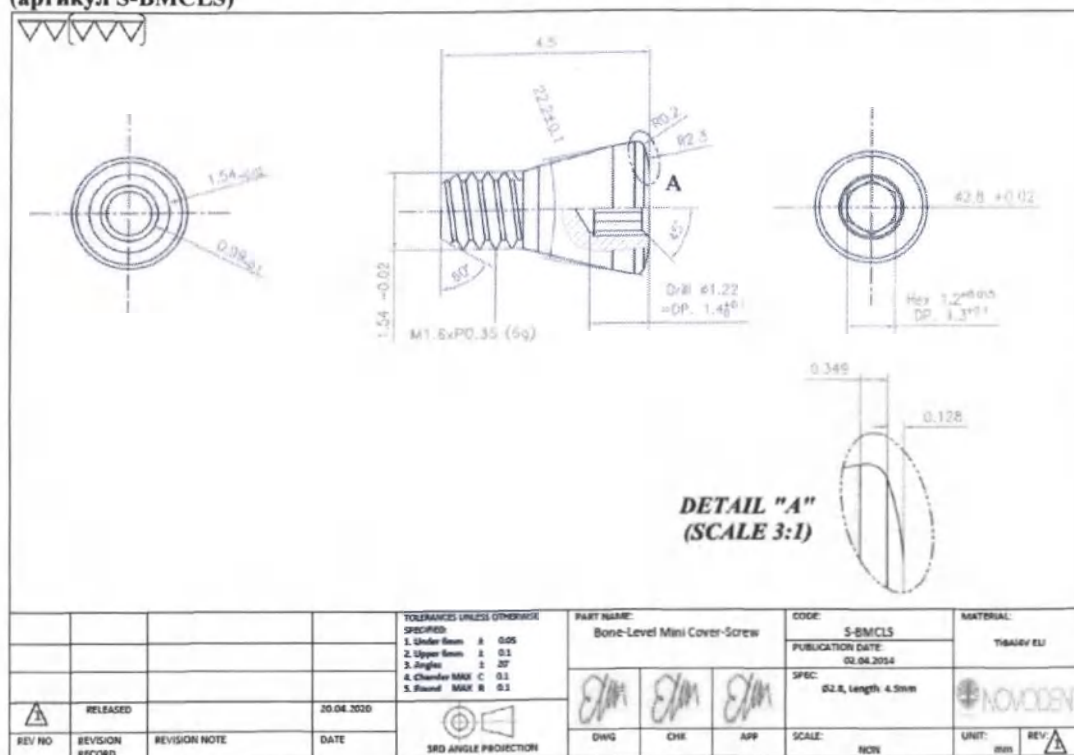Винт Implantswiss Bone Level Mini Closing Screw, Dimensions: Diameter - 2.8 mm, Length - 4.5 mm STERILE
(артикул S-BMCLS)




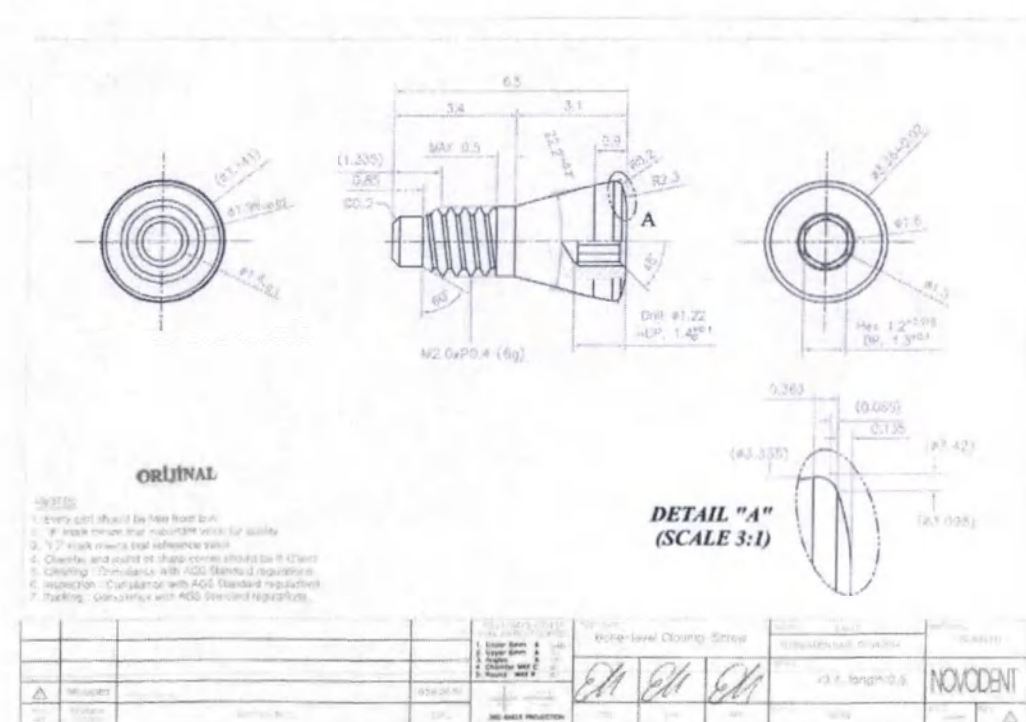Винт Implantswiss Bone Level Closing Screw, Dimensions: Diameter - 3.36 mm, Length - 6.5 mm STERILE
(артикул S-BCLS)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации»
implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

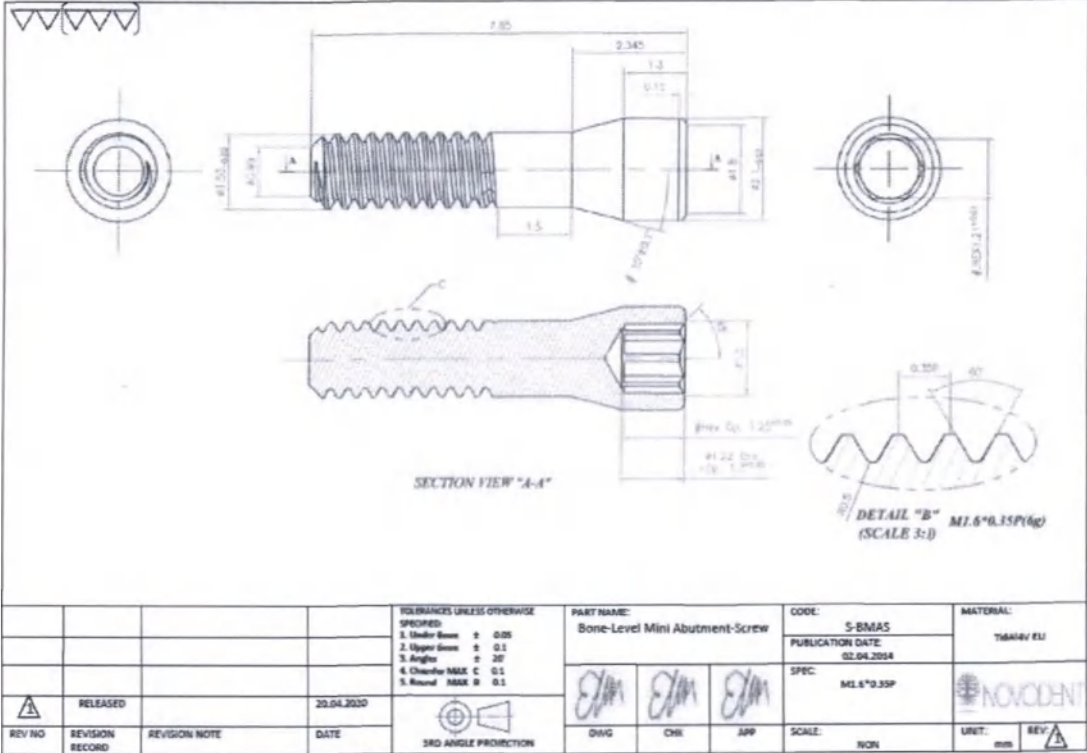Винт Implantswiss Bone Level Mini Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 2.1 mm, Length - 7.65 mm NON STERILE (артикул S-BMAS)



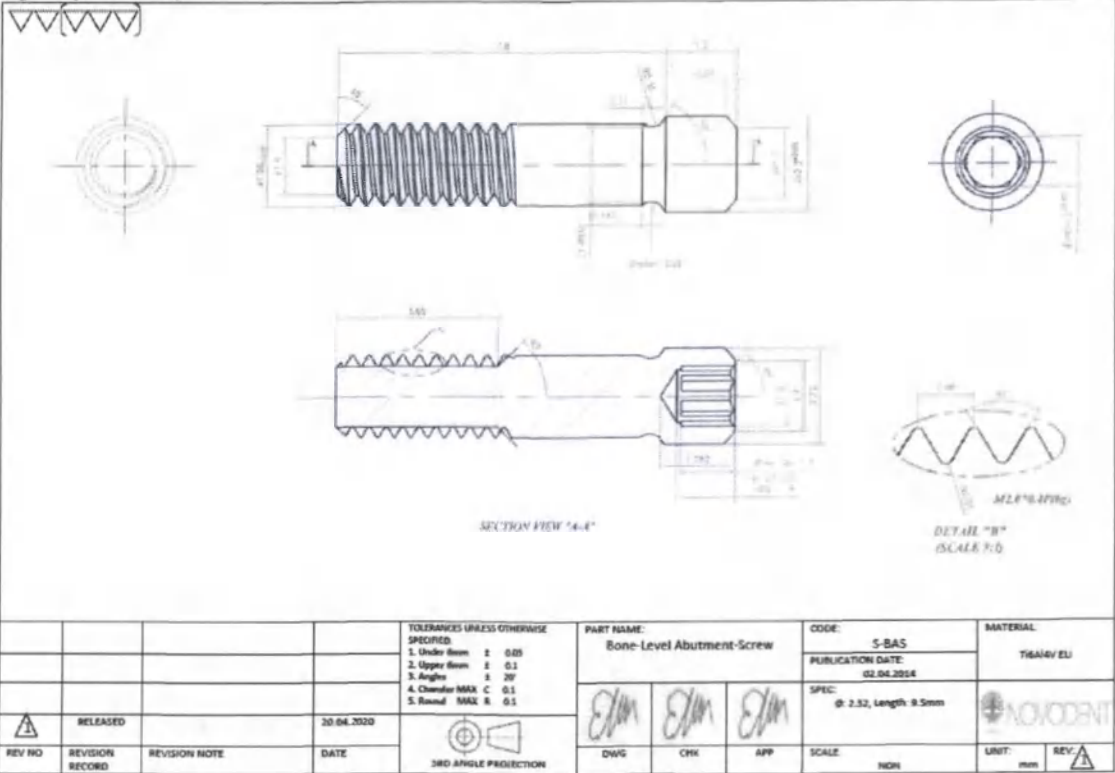Винт Implantswiss Bone Level Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 2.3 mm, Length - 9.5 mm NON STERILE (артикул S-BAS)




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»




implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

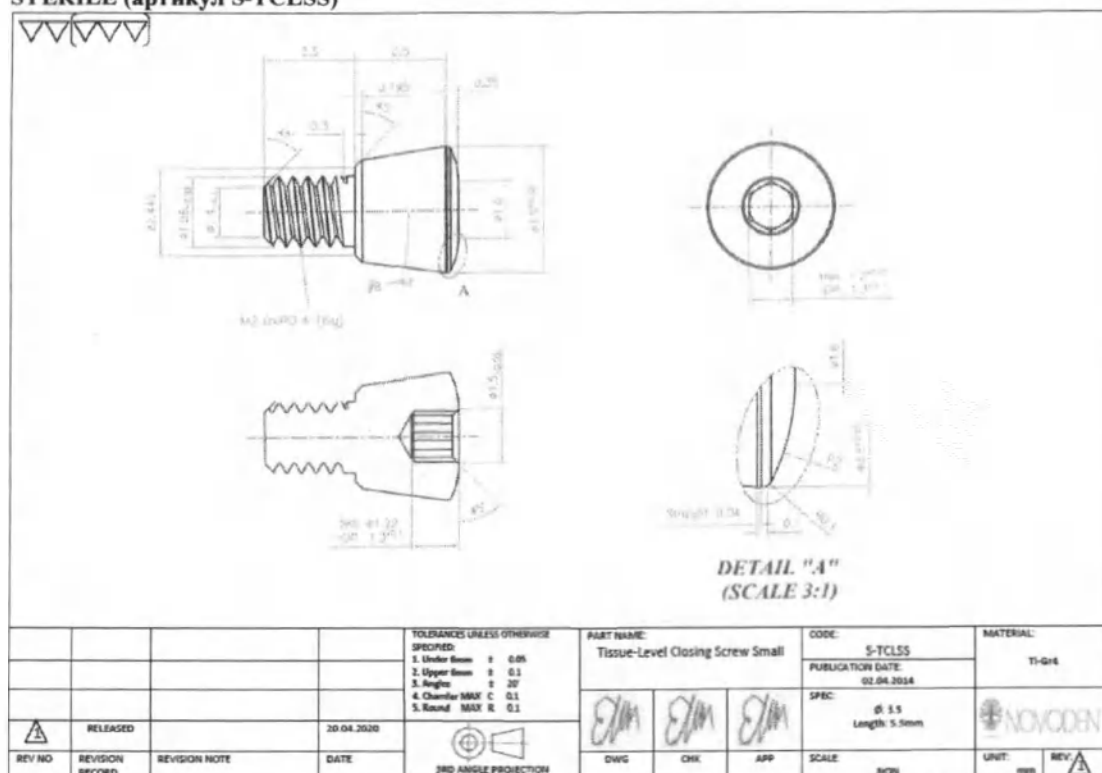**Винт Implantswiss Tissue Level Closing Screw Small, Dimensions: Diameter - 3.5.0 mm, Gingival Height - 5.35 mm
STERILE (артикул S-TCLSS)**




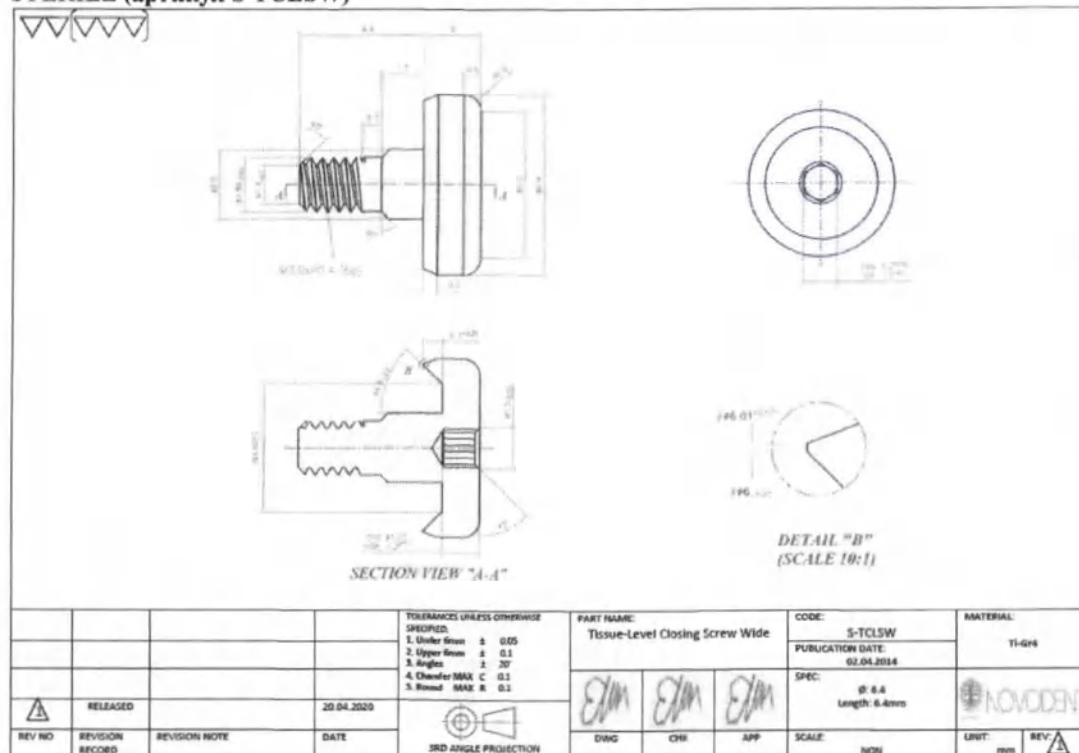**Винт Implantswiss Tissue Level Closing Screw Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 6.4 mm
STERILE (артикул S-TCLSW)**



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

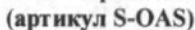(артикул S-OAS)



implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

9. Способ (порядок) применения

9.1. Принцип работы.

Имплантаты и абатменты Implantswiss могут быть установлены как в 2-х, так и в 1-й стадии хирургической процедуры.

В 1-этапной хирургической процедуре осуществляется доступ к челюстной кости и делается разрез в области, где будет установлен имплантат. С помощью серии сверл увеличивающегося диаметра делается отверстие для установки зубного имплантата. После установки зубной имплантат покрывается временным (заживляющим) абатментом, если толщина десны выше альвеолярного отростка (не менее 2 мм).

После того, как прошло достаточное время заживления десны (примерно 2 недели), временный заживляющий абатмент удаляется и заменяется окончательным зубным абатментом. Заживляющий колпачок находится на абатменте до тех пор, пока протез не будет готов к реставрации.

Перед установкой заживляющего колпачка снимается слепок абатмента. Этот слепок будет использован для построения протезной реставрации. Подготовленную протезную реставрацию помещают поверх зубного абатмента и прикрепляют цементом и/или Абатментным винтом.

При двухэтапной хирургической процедуре осуществляется доступ к челюстной кости и делается разрез в области, где будет установлен имплантат. С помощью серии сверл увеличивающегося диаметра делается отверстие для установки зубного имплантата. После установки зубной имплантат закрывается винтом, а разрез десны ушивается.

По истечении периода заживления, составляющего 3-6 месяцев, зубной имплантат вскрывают и удаляют закрывающий винт. Временный заживляющий абатмент устанавливается для облегчения заживления окружающей ткани десны перед установкой постоянного зубного абатмента.

После того, как прошло достаточное время заживления десны (примерно 2 недели), заживляющий абатмент удаляется и заменяется окончательным зубным абатментом. Заживляющий колпачок находится на абатменте до тех пор, пока протез не будет готов к реставрации.

Перед установкой заживляющего колпачка снимается слепок абатмента. Этот слепок будет использован для построения протезной реставрации. Подготовленную протезную реставрацию помещают поверх зубного абатмента и прикрепляют цементом и/или Абатментным винтом.

9.2. Руководство по протезированию на дентальных имплантатах Implantswiss

Система дентальных имплантатов Implantswiss предназначена для хирургического размещения в верхней и нижней челюстных дугах, чтобы обеспечить корневую форму

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 249 из 344

фиксации для крепления одного и нескольких протезов для восстановления жевательной функции пациента.

Дентальные имплантаты Implantswiss могут быть установлены методом обычной двухэтапной хирургической имплантации с возможностью трансмукозального заживления или могут быть установлены в один этап с возможностью немедленной нагрузки.

Немедленная нагрузка не допускается на передний отдел нижней челюсти, закрепленный на четырех имплантатах стержневой конструкции.

Имплантаты представлены в двух видах: «на уровне кости» и «на уровне мягкой ткани». Конструкция имплантата представлена в виде винтовой или резьбовой; гибридной или прямой.

Система абатментов Implantswiss используется вместе с дентальными имплантатами для обеспечения протезных реставраций, таких как коронка, мостовидный протез и передние протезы у частично или полностью беззубых пациентов.

Абатмент обеспечивает связь между эндооссальным креплением и протезом, который образует верхнее строение и позволяет пациенту жевать.

Модели абатментов Octa и Multi-Unit, с высотой шейки абатмента менее 4 мм, предназначены только для многокомпонентной нагрузки, такой как мостовидный протез или съемный протез.

Соединение абатмента и имплантата зависит от типа имплантата.

Имплантационная хирургия и реставрация - это сложные стоматологические процедуры. Данная процедура должна проводиться только опытным хирургом.

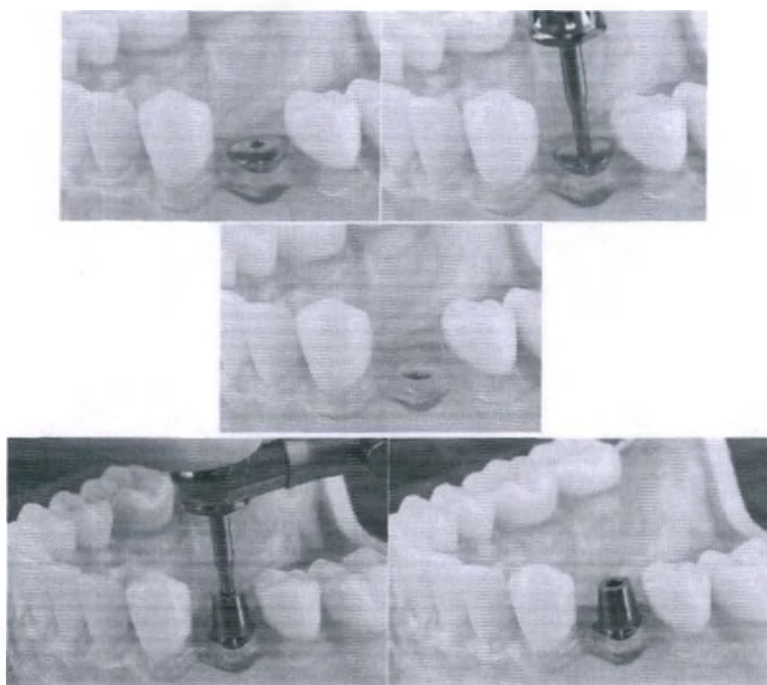
МОНОЛИТНАЯ (SOLID) СИСТЕМА

В системах дентальных имплантатов Implantswiss присутствует возможность использования монолитного (Solid) абатмента как для имплантатов на уровне костной ткани, так и для имплантатов на уровне мягких тканей.

Для имплантатов на уровне костной ткани существует в общей сложности 20 различных размеров монолитных абатментов, включая 3,7 мм (S-BMSA37--), 4,5 мм (S-BSA45--), 5,5 мм (S-BSA55--), и 6,5 мм (S-BSA65--), диаметров и высотой наддесневой части 1 мм - 2 мм - 3 мм - 4 мм и 5 мм для каждого диаметра.


Существуют варианты монолитных абатментов размером 4 мм (S-TSA40) - 5,5 мм (S-TSA55) и 7 мм (S-TSA70) для имплантатов на уровне мягкой ткани. Также есть различные варианты монолитных абатментов размером 4 мм (S-TSAL40) - 5,5 мм (S-TSAL55) и 7 мм (S-TSAL70) для имплантатов на уровне мягкой ткани.

Система монолитных абатментов требует изготовления слепка на уровне абатмента, а не на уровне имплантата. Описание системы слепков и этапов протезирования:




На первом этапе подбирается абатмент подходящей высоты и ширины, который вставляется в зависимости от внутриротовых свойств пациента.

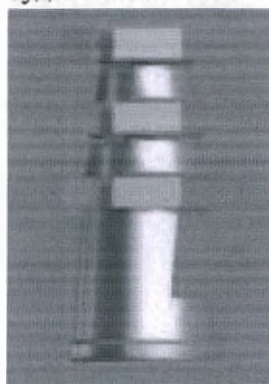После того, как абатмент окончательно определен, производится ввинчивание с крутящим моментом, так как имплантат будет постоянным.




На втором этапе снимается слепок с помощью трансфера - приспособления, используемого для передачи полного соответствия положения имплантата в полости рта на слепочную модель. Монолитный абатмент, который используется на этом этапе, не войдет в шестиугольник или восьмиугольник имплантата, поэтому абатмент может занимать положение в большом количестве комбинаций. Это положение должно быть точно отражено на гипсовой модели, и для этой цели используется позиционный цилиндр монолитной системы.

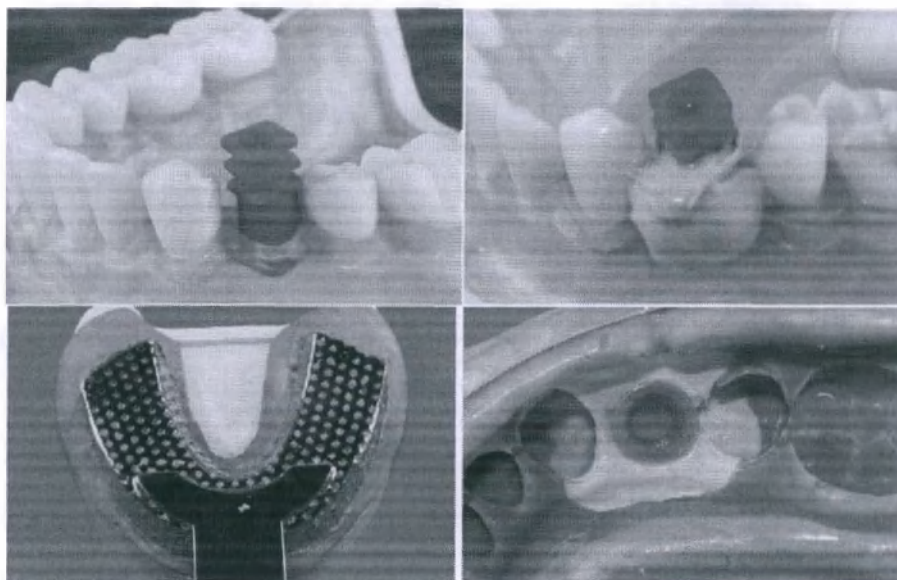



Позиционный цилиндр (колпачок) устанавливается на абатмент и затем снимается слепок. Следует отдать предпочтение слепочным материалам на силиконовой основе.



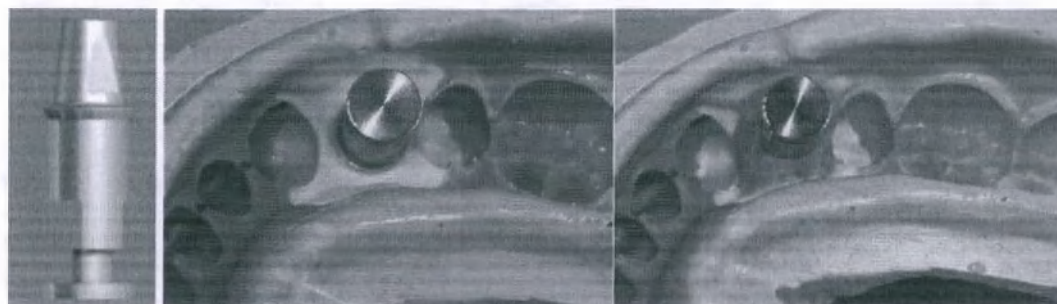
После снятия слепка временная коронка фиксируется на абатменте временным цементом, и пациент может пользоваться ею до следующей приема. Временная коронка устанавливается для того, чтобы металлическая поверхность абатмента не беспокоила пациента до следующего приема, а также для предотвращения покрытия мягкой тканью шейки абатмента.



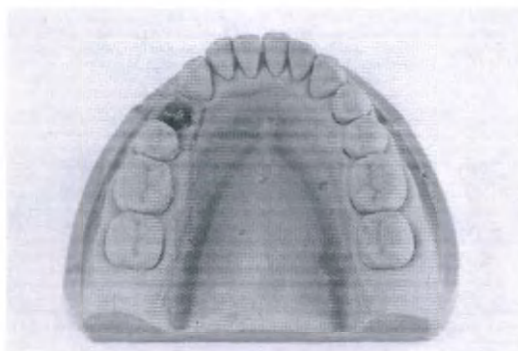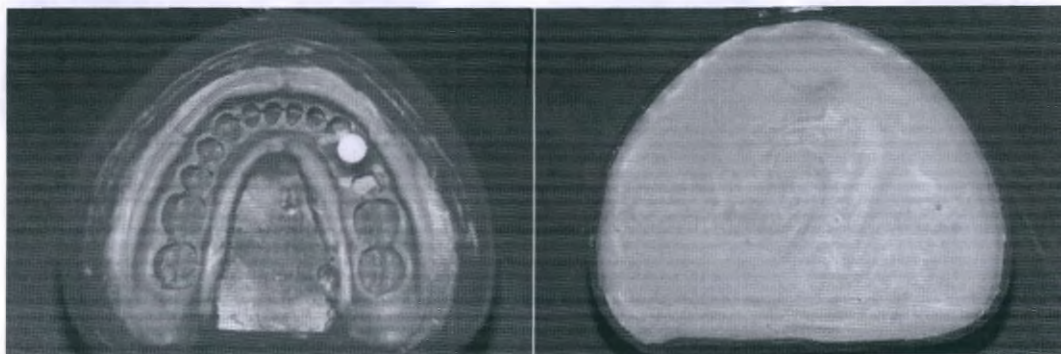
Позиционный цилиндр находится в правильном положении в слепке, и прочный аналог абатмента правильно установлен в него вне зависимости от используемого абатмента.



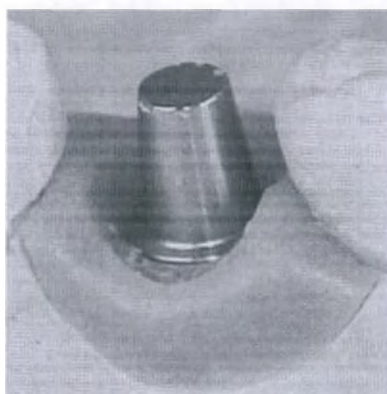Далее гипс следует залить в слепочную ложку. Необходимо также слегка потрясти слепок, чтобы не образовалось воздушных карманов и гипс распределился по всей форме.



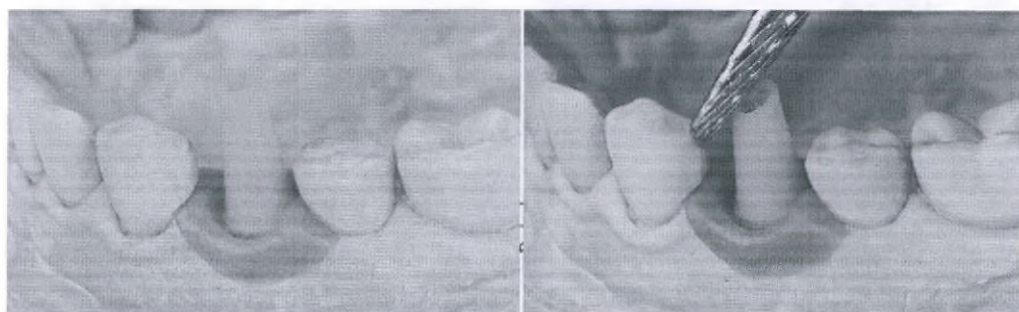Теперь техник может приступить к процессу создания коронки по гипсовой модели и аналогу абатмента.




антации:

а 253 из 344



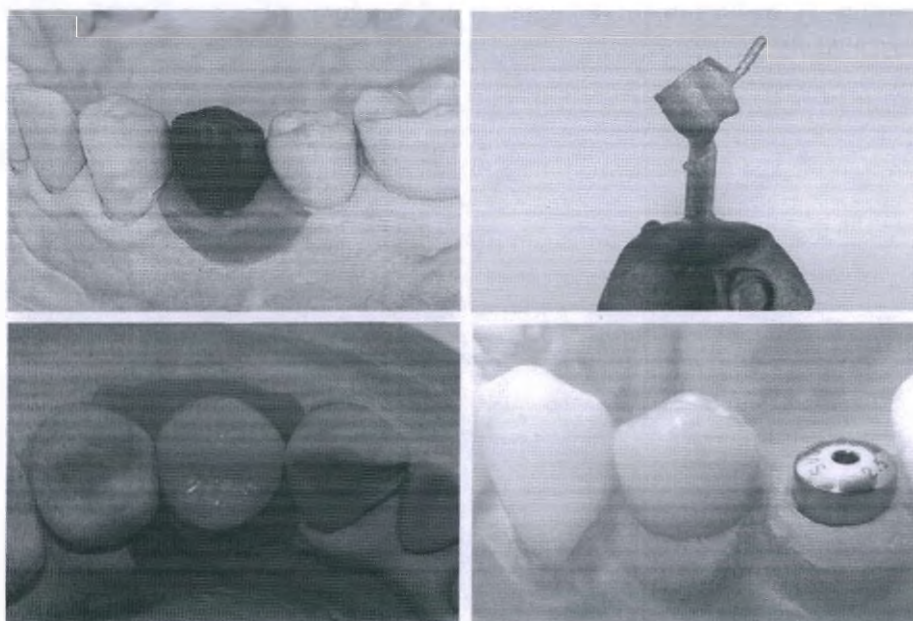У техника может получиться гораздо более точное моделирование и, таким образом, металл, совместимый с абатментом, можно будет получить с помощью коронки для одиночных имплантатов или литейного пластика для зубных мостовидных протезов - зависит от типа работ.



Окончательная коронка крепится на прочный абатмент во рту пациента постоянным цементом. При этом необходимо учитывать, что на шейке коронки и в области зубных рядов не должно быть никаких остатков цемента. Потому что бактерии могут легко размножаться на остатках цемента, что вскоре приведет к периимплантиту.

АБАТМЕНТ COUPLE И COUPLE СИСТЕМА – АБАТМЕНТ O-RING И АБАТМЕНТ LOCATOR

В системах дентальных имплантатов Implantswiss, абатмент Couple, абатмент O-ring и абатмент Locator доступны как для имплантатов уровня костной ткани, так и для уровня мягкой ткани.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 254 из 344

Всего существует 16 различных размеров абатментов Couple, включая 1 мм (S-TCA -)-2 мм (S-TCA -) 3 мм (S-TCA -) и 4 мм (S-TCA -) – варианты для имплантатов уровня мягкой ткани.

Что касается имплантатов уровня костной ткани, то всего существует 60 различных размеров абатмента Couple, включая 3,7 мм (S-BMCA37--) и (S-BMCAN37--), 4,5 мм (S-BCA45--) и (S-BCAN45--), 5,5 мм (S-BCA55--) и (S-BCAN55--) и 6,5 мм (S-BCA65--) и (S-BCAN65--) диаметром и 1 мм - 2 мм - 3 мм - 4 мм и 5 мм - высота десневой части каждого диаметра.

Всего существует 3 различных размера абатментов O-ring, включая 0,5 мм (S-TORA- -), 2,0 мм (S - TORA--) и 4,0 мм (S-TORA--) - варианты имплантатов уровня мягкой ткани.

Для имплантатов уровня костной ткани всего существует 9 различных размеров абатментов O-ring, включая 0,5 мм (S-BMORA--), 2,0 мм (S-BMORA--), 4,0 мм (S-BMORA--), 0,5 мм (S-BORA--), 1,0 мм (S-BORA--), 2,0 мм (S-BORA--), 3,0 мм (S-BORA--), 4,0 мм (S-BORA--), 5,0 мм (S-BORA--), в 6,0 мм (S-BORA--)

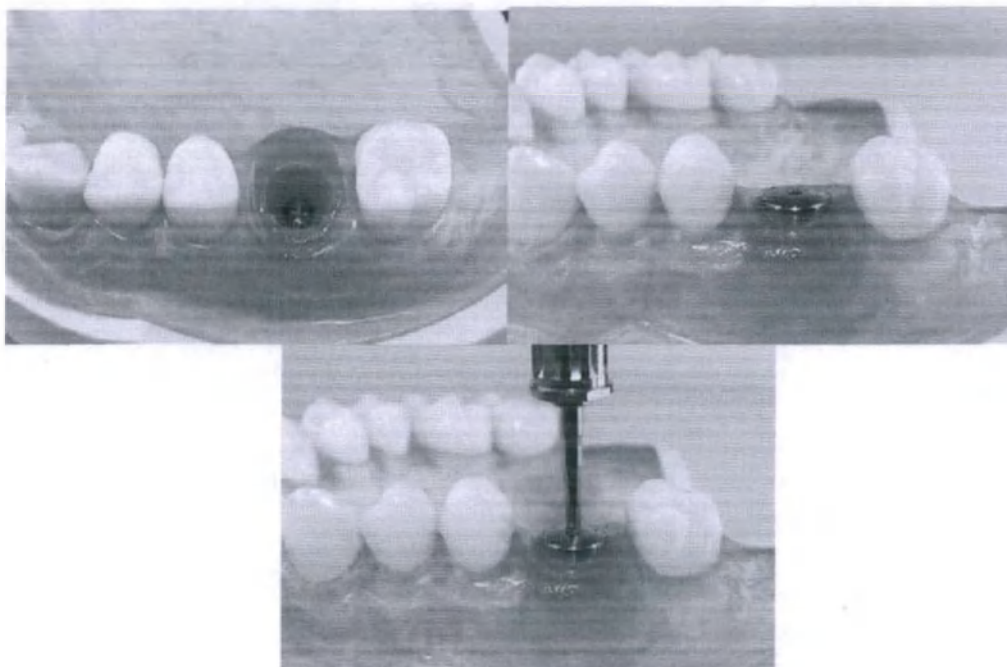
Всего существует 6 различных размеров абатментов Locator, включая 1,5 мм (S-TLA--), 2,5 мм (S - TLA--), 3,5 мм (S-TLA--), 4,5 мм (S-TLA--), 5,5 мм (S-TLA--) и 6,5 мм (S-TLA--) - варианты имплантатов на уровне мягкой ткани.

Что касается имплантатов уровня костной ткани, то всего существует 12 различных размеров абатментов Locator, включая 1,5 мм (S-BMLA--) и (S-BLA--), 2,5 мм (S-BMLA--) и (S-BLA--), 3,5 мм (S-BMLA--) и (S- BLA--), 4,5 мм (S-BMLA--) и (S-BLA--), 5,5 мм (S-BMLA--) и (S-BLA--), и 6,5 мм (S- BMLA--) и (S-BLA--).


Абатмент Couple, абатмент O-ring и абатмент Locator требуют слепка на уровне абатмента, а не на уровне имплантата. Можно описать систему слепков и этапы протезирования в целом следующим образом:

- Во-первых, существует два метода создания слепка на уровне имплантата.
- Первый из этих методов включает в себя способ получения слепка с помощью открытой ложки, который немного сложнее, но имеет гораздо меньшую погрешность,
- А второй метод включает в себя способ получения слепка с помощью закрытой ложки, который проще, чем способ получения слепка с помощью открытой ложки, но имеет более высокую погрешность.
- Мы можем объяснить каждый из этих методов следующим образом:

СПОСОБ СНЯТИЯ СЛЕПКА С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ;



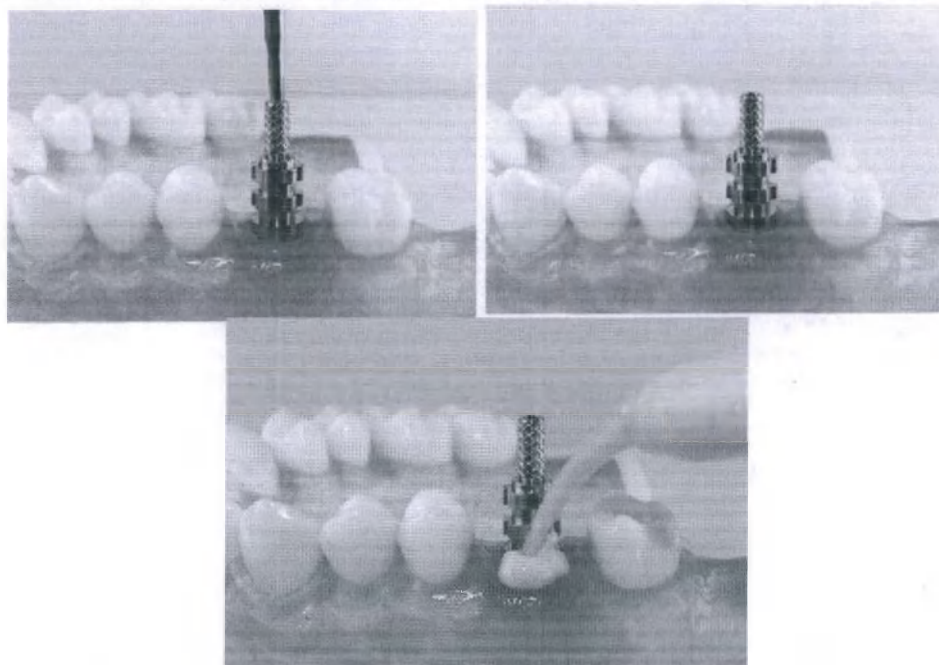Прежде всего, заживляющий колпачок во рту пациента осторожно снимают, и по возможности ткань следует промыть антисептическим раствором. Заживляющий колпачок также следует держать в антисептическом растворе во время снятия слепка.




Слепочная ложка для переноса материала должна быть помещена на имплантат во рту пациента, как это показано на рисунке. Здесь важно обратить внимание на правильный диаметр материала для переноса слепка в соответствии с используемым заживляющим колпачком, таким образом, слепок может быть более аккуратным.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 256 из 344

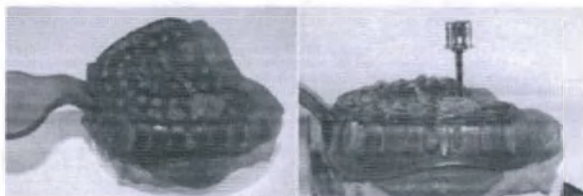Более того, важно также убедиться, что шестиугольник на материале вписывается в шестиугольник на имплантате во время введения материала для снятия слепка. Если вращение отсутствует, когда мы пытаемся сдвинуть шестиугольник вправо и влево, это означает, что шестиугольник соединился с имплантатом.




В случае совершения ошибки на данном этапе, слепок придется переделать, и первая работа будет считаться бракованной.

Далее, используя слепочную ложку из одноразового пластика, как показано на рисунке, необходимо просверлить точки, из которых будет доступен выход имплантату, или провести другой процесс снятия слепка до того, как будет вставлен материал для снятия слепка, и техник сделает специаль-

ную акриловую заготовку, а затем просверлить точки, из которых имплантату будет доступен выход. Винт слепочного материала должен проходить через это отверстие, чтобы мы могли ослабить этот винт после того, как слепочный материал затвердеет и слепочную ложку можно было вынуть изо рта пациента.

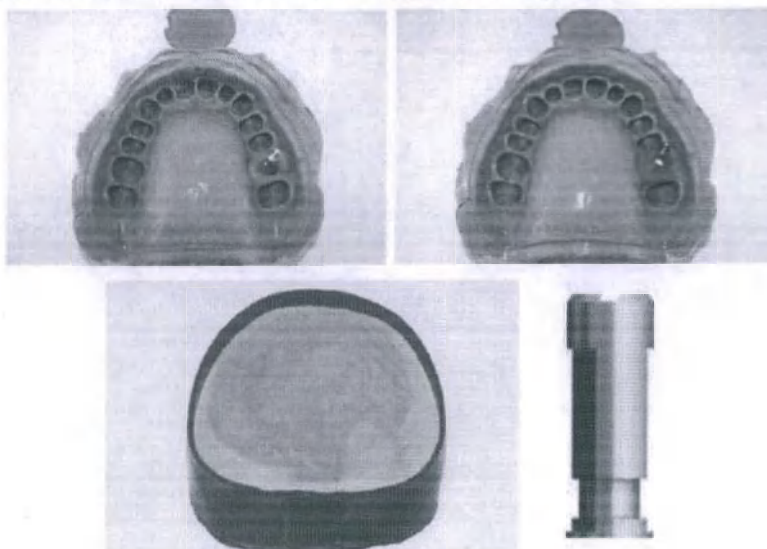
Преимущество этого способа заключается в получении слепка путем точного отражения положения имплантата во рту пациента, поскольку материал для переноса слепка изначально будет находиться в ложке, а не вводиться снаружи.



Затем, лабораторные аналоги с артикулом S-TFLA должны использоваться на уровне мягкой ткани или с артикулами S-TFLA; 3,3 аналоги должны использоваться для 5,5 уровня мягкой ткани; аналоги с артикулом S-BMFLA должны использоваться для мини-имплантатов и аналоги с артикулом S-BMFLA должны использоваться для других имплантатов уровня костной ткани. Лабораторный аналог должен быть привинчен к материалу для переноса слепка в ложке, а гипс должен быть отлит в ложку.


Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

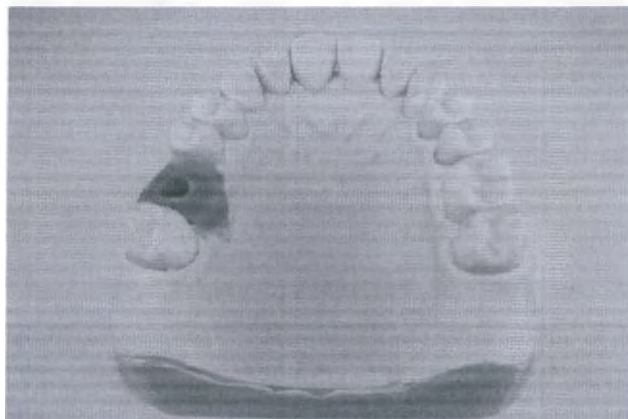Страница 257 из 344




Следуя всем этим шагам, процесс снятия слепка будет совершен, и гипсовая модель создается на уровне имплантата с помощью способа снятия слепка открытой ложкой.

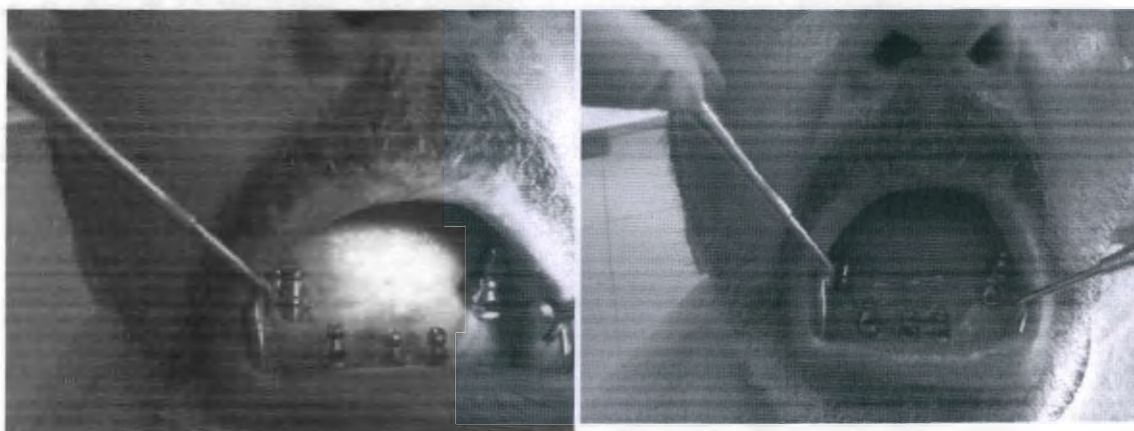СПОСОБ СНЯТИЯ СЛЕПКА С ПОМОЩЬЮ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ;



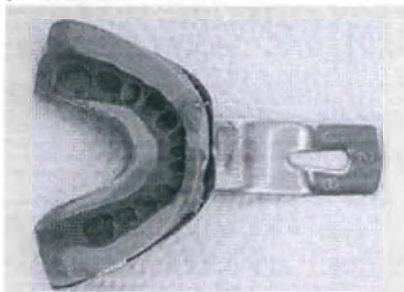Несмотря на то, что этот способ в основном совпадает с системой снятия слепка с помощью открытой ложки, в нем следует использовать материал для переноса слепка с закрытой ложкой, как это показано на рисунке. Также важно отдать предпочтение материалу для снятия слепка, который имеет тот же диаметр, что и заживляющий колпачок, используемый в системе снятия слепка с помощью открытой ложки.



Стандартная слепочная ложка может быть использована для способа снятия слепка с помощью закрытой слепочной ложки, поскольку материал для снятия слепка останется в ложке, и только форма материала для переноса будет сформирована в виде корпуса в

ложке. В этом способе лабораторный аналог и материал для снятия слепка соединяются в ложке, а затем помещаются в корпус, который ранее был сформирован для снятия слепка. Поэтому в этом методе снятия слепка нет предела погрешности. Но любая ошибка во время вставки может стать причиной начала всего процесса.

На следующем этапе техник или стоматолог, который будет делать протез, может выбрать абатмент по гипсовой модели. Опции абатмента Couple также довольно широки как для уровня мягкой ткани, так и для уровня костной ткани.

ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ УРОВНЯ КОСТНОЙ ТКАНИ,

Существует 20 различных размеров гладких абатментов Couple, включая диаметры 3,7 мм (S - BMCA37--), 4,5 мм (S-BCA45--), 5,5 мм (S-BCA55--), 6,5 мм (S-BCA65--), и высоту десен 1 мм-2 мм-3 мм-4 мм-5 мм на каждый диаметр,

Более того, существует 15 различных форм вариантов абатмента Angled Couple (углового соединительного), в общей сложности, включая 2 мм и 4 мм высоты десен для каждого диаметра 4,5 мм 5,5 мм и 6,5 мм для каждой 15-градусной и 25-градусной угловых форм; и 1 мм-2 мм и 4 мм высоты десен для диаметра 3,7 мм для угла 15 градусов.

Для различных показаний, отличных от приведенных выше, существуют бесступенчатые и 11-миллиметровые абатменты Multi с диаметрами 3,7 мм, 4,5 мм и 5,5 мм, которые могут быть формоизменены специалистом.

Однако, существуют так называемые негексальные формы Non-Hex этих абатментов, которые не вписываются в шестиугольник, и, в общей сложности, в 76 различных форм соединений абатмента для имплантатов на уровне костной ткани Implantswiss.

ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ УРОВНЯ МЯГКОЙ ТКАНИ,

Существуют абатменты SynOcta диаметром 3,5 мм и высотой 6 мм (S-TSOA), которые вписываются в восьмиугольник имплантата и используют шейку имплантата в качестве ступени.

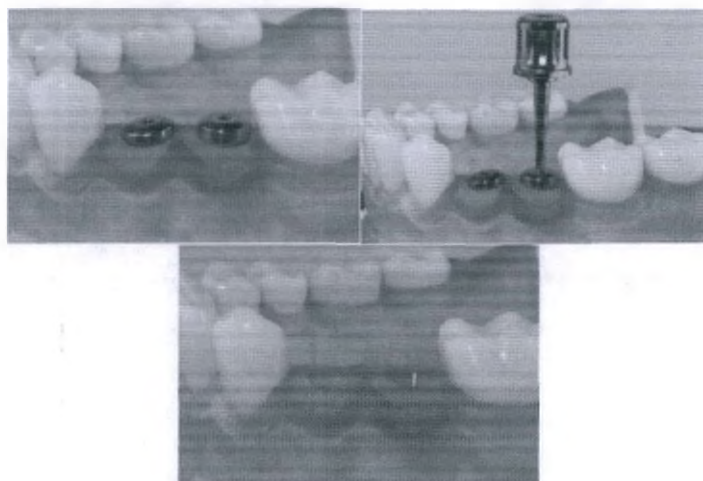
Более того, существуют также абатменты Couple диаметром 5,2 мм и 6,4 мм с высотой десневой части 1 мм - 2 мм-3 мм-4 мм на диаметр, которые могут увеличить полированную область на шейке имплантата.

Помимо диаметра 3,7 мм, также доступны 15-градусные (S-TAA15) и 25-градусные (S-TAA25) угловые абатменты Angled, которые помещаются в имплантат и используют шейку имплантата в качестве ступени, как это делают абатменты SynOcta.


Как и в случае имплантатов уровня костной ткани, абатмент Multi (S-TMA) также доступен для имплантатов уровня мягкой ткани, и диаметр этих абатментов составляет 5,2 мм.

Существует 12 различных форм абатмента Couple уровня мягкой ткани, подходящих под форму восьмиугольника. Принимая во внимание то, что их формы не являются Окта-формами, нам доступны в общей сложности 24 различных варианта соединений абатмента.

АБАТМЕНТЫ ОСТА И MULTI-UNIT ДЛЯ ОККЛЮЗНЫХ ВИНТОВЫХ РЕСТАВРАЦИЙ



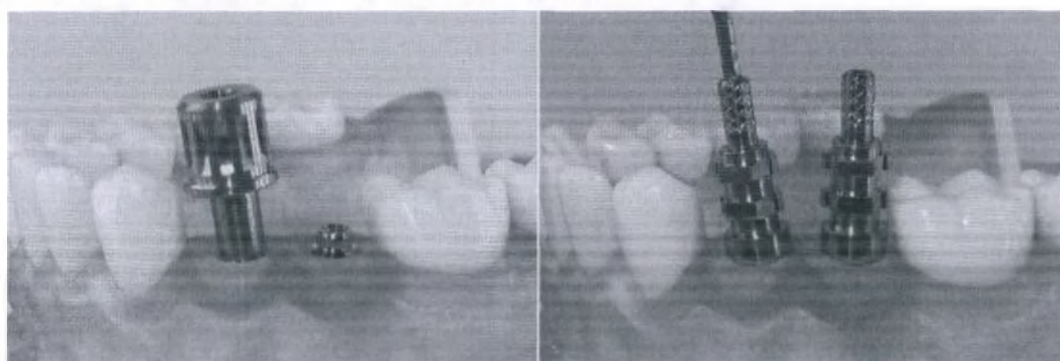Если необходимо изготовить короткую коронку без достаточного места для цемента, особенно на задней зубной дуге, предпочтительнее будет реставрация с винтовой окклюзией, которая может быть выполнена как одиночная коронка или зубной мост. Реставрация мостовидного протеза с окклюзионными винтами будет выполнена на зубах под номерами 4 и 5 нижней челюсти, указанными на рисунке выше.




Прежде всего, выбирается соответствующий абатмент Окта или Multi-unit, который закручивается при 25 Нсм.

Всего существует 16 различных размеров абатментов Multi-unit, включая 4,8 мм (S-BMMUA48--) и (S-BMUA48--), а также 170 угловых с 4,8 мм (S-BMUA4817-) и 250 угло-


вых с 4,8 мм (S-BMUA4825-) вариантов высоты десен 1 мм, 2 мм и 3 мм для имплантатов на уровне костной ткани.

Процесс и материалы, используемые для имплантации на уровне мягких тканей и тканей кости, одинаковы. Однако один из абатментов S-BOA10 - S-BOA20 - S-BOA30 - S-BOA40 или S-BOA50, предлагающих 5 различных десневых высот от 1 мм до 5 мм, может быть выбран в соответствии с надлежащей высотой десны для уровня костной ткани, в то время как мы используем абатмент S-TOA Osta на уровне мягкой ткани.

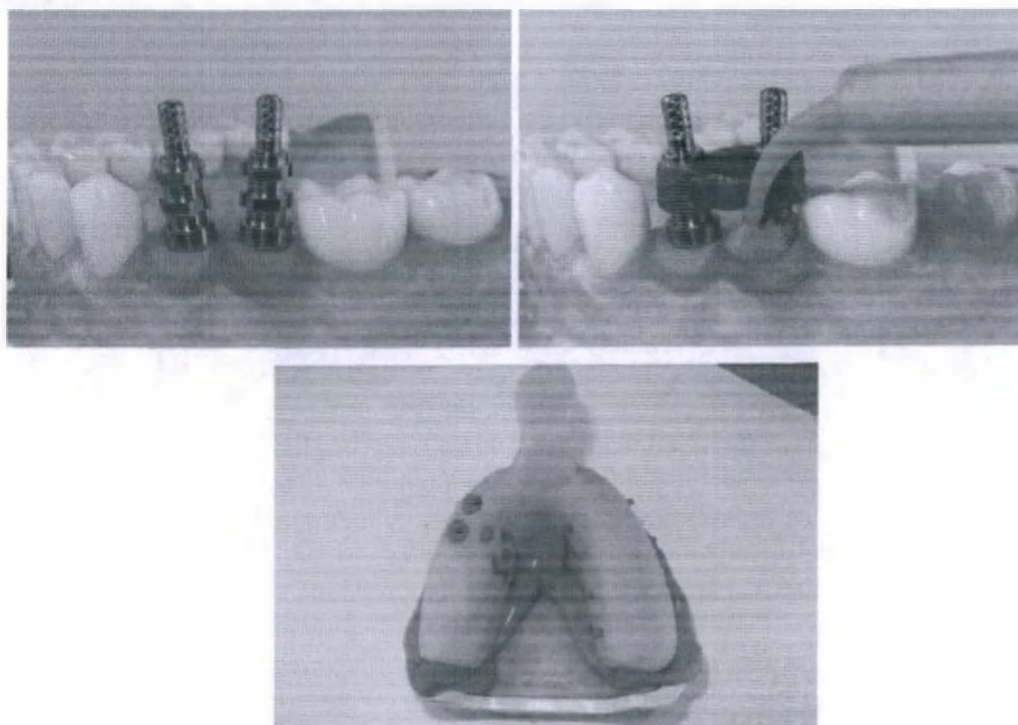
Позже мы отбираем один из слепочных трансферов (impression transfer) для открытой ложки (S-ICOAP) или закрытой ложки (S-ICOAT) и устанавливаем его на ранее закрученный абатмент.




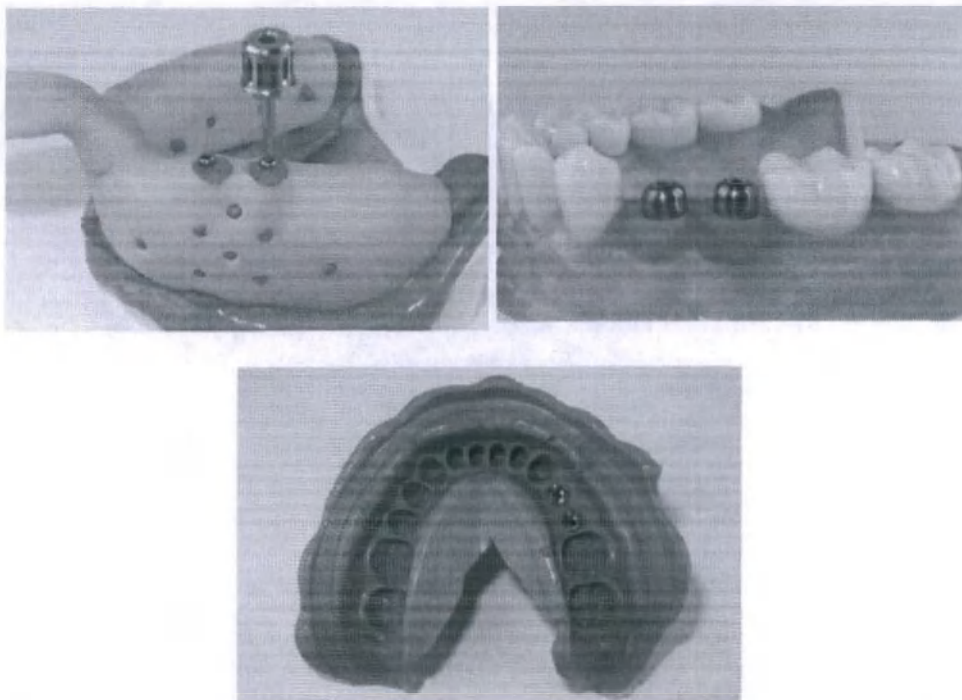Затем снимается слепок, и снова, было бы полезно предпочесть слепочные материалы на основе силикона.




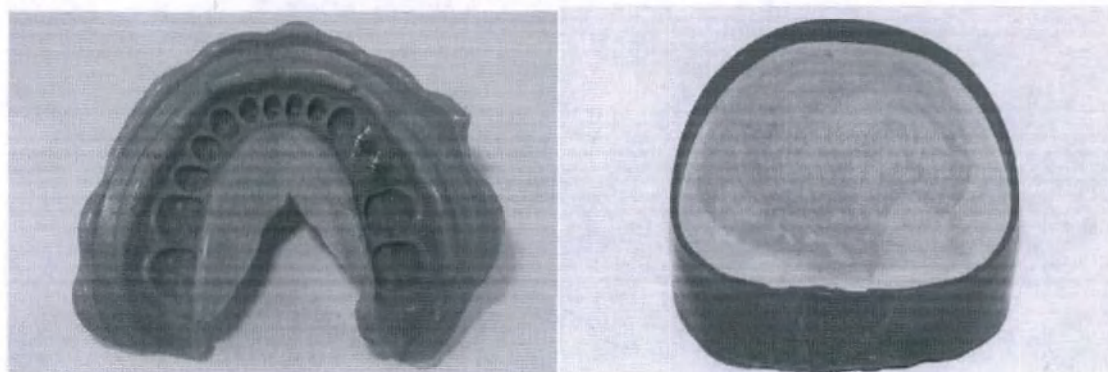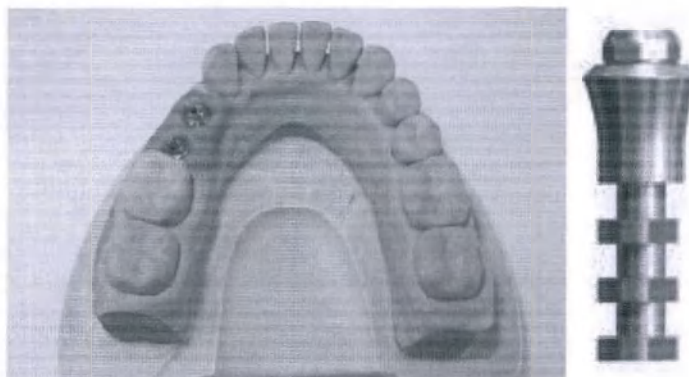После того, как слепочный материал затвердеет, слепочная ложка удаляется, и S-ОАНСар, специальный заживляющий колпачок Osta системы, устанавливается на абатмент во рту пациента, чтобы десна не закрыла абатмент, пока проводится работа в лаборатории.







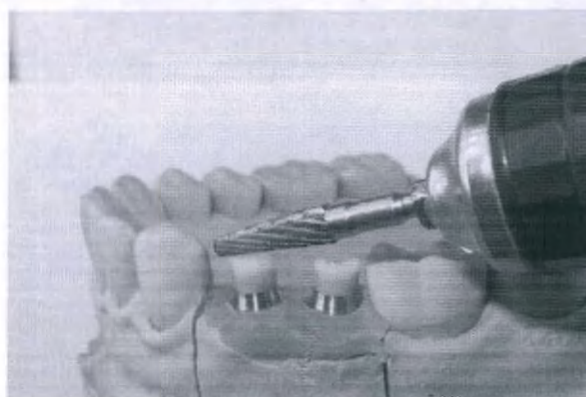
Далее, лабораторный аналог (S-OALA) из Osta системы, соединяется с материалом трансфера в слепочной ложке, и гипс заливается в ложку. Имейте в виду, что для получения ровной гипсовой модели очень важно слегка потрясти гипсовую заготовку.



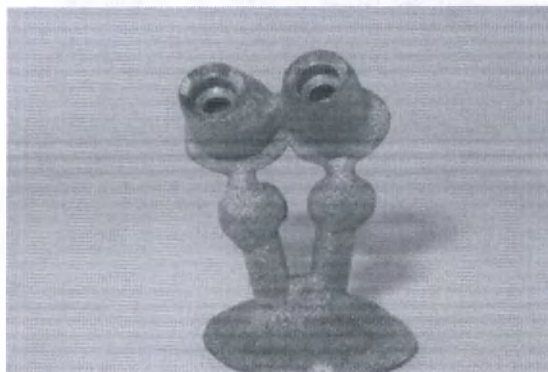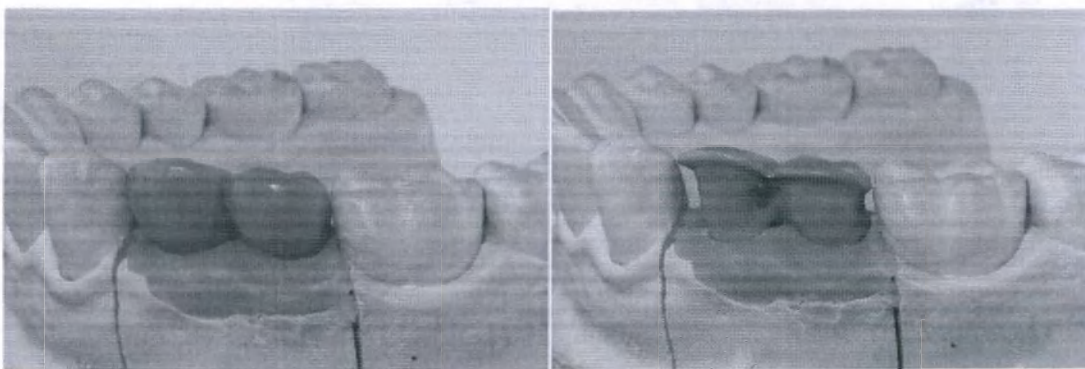Теперь техник может работать над гипсовой моделью; а также подогнать цилиндрические колпачки: S-OAPICyN (Белый) литейный пластик, предназначенный для мостовидных протезов, и S-OAPICy (черный) литейный пластик, предназначенный для одиночных коронок, к модели с окклюзионным винтом, входящим в комплект поставки, и выполнить восковое моделирование.




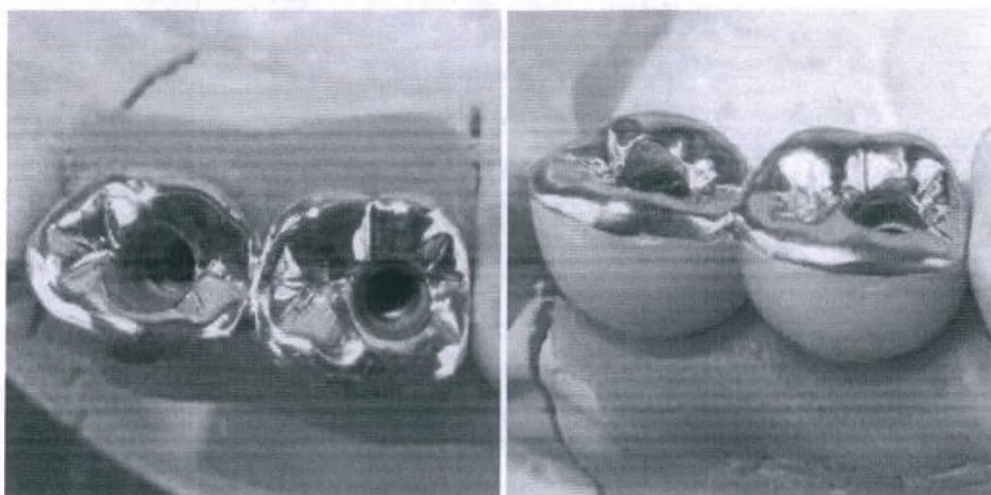Сперва выполняется восковое моделирование, а затем литье металла.




Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

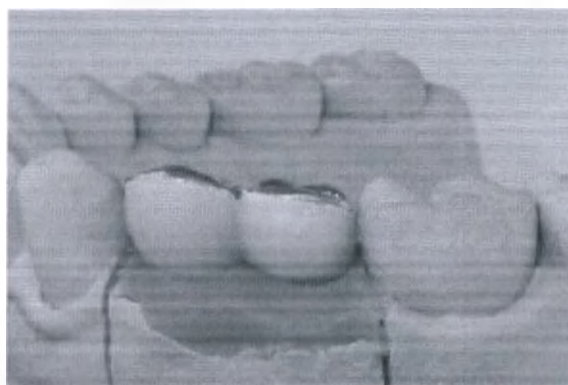Страница 264 из 344



И окклюзионные винтовые коронки готовы.

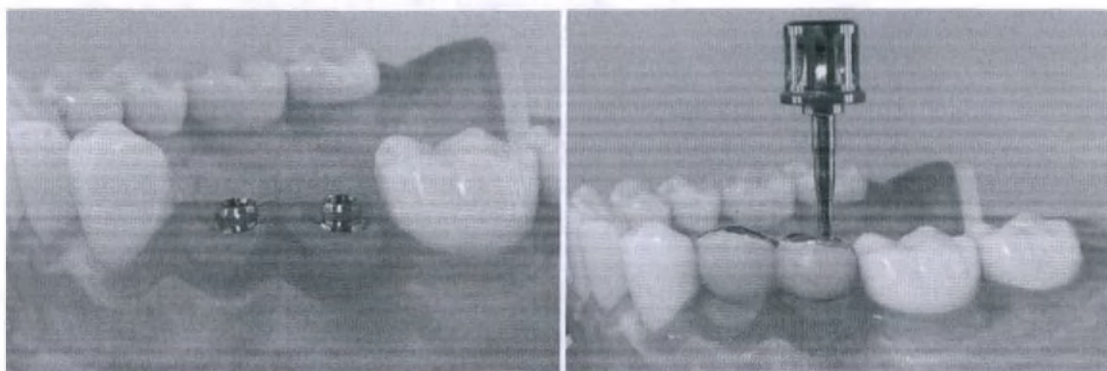


Наконец, эти окклюзионные винтовые коронки вставляются на абатмент Octa во рту пациента и фиксируются во рту окклюзионным винтом, входящим в комплект абатмента Octa. Затем они закручиваются при 20 Нсм, и на этом реставрация завершается.

ГИБРИДНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БАЛОЧНАЯ СИСТЕМА;


Здесь балка изготавливается с помощью Octa системы, и гибридный протез помещается на эту балку. На первом этапе вставляется абатмент и готовится гипсовая модель, как было описано выше в Octa системе.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

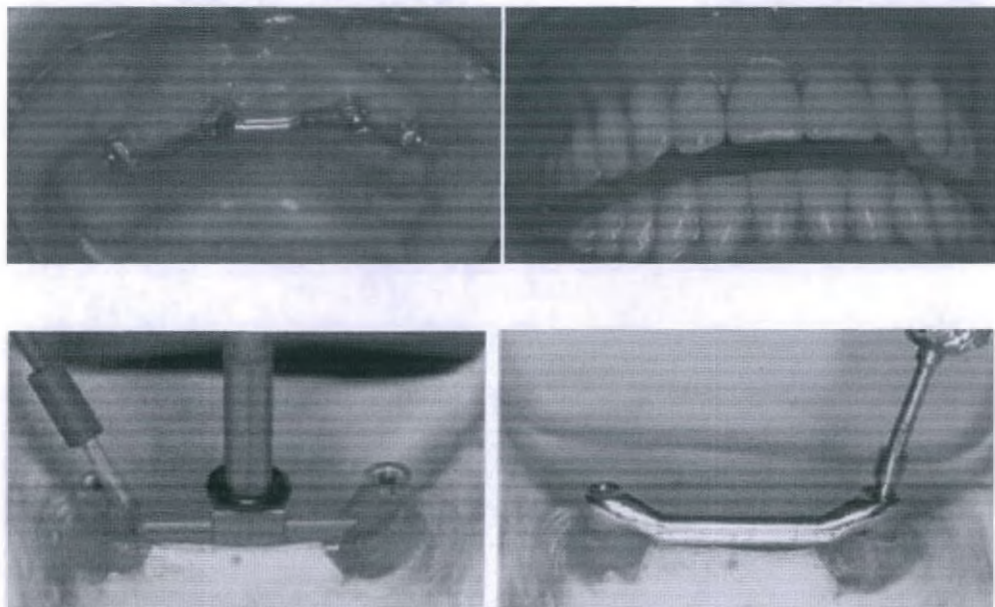Страница 265 из 344



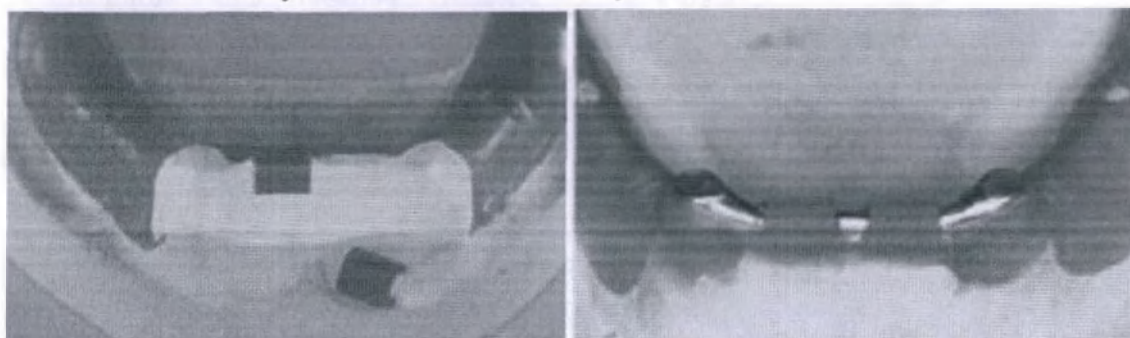
Мостовое основание регулируется между отливаемыми основаниями на гипсовой модели со вставленным аналогом Octa-абатмента с помощью отливаемой восковой балки, и пластиковой балки, которая уже была подготовлена, и далее включается в процесс отливки. Отлитая балка устанавливается на гипсовую модель.



Позже зажим позиционера регулируется на балке, и отливаемый пластик сформирует необходимый корпус, чтобы матрицы балки могли надлежащим образом поместиться на металлический корпус, на который будет отлит зажим позиционера. Затем для корпуса производится восковая лепка, и литой бокс регулируется на тех участках, где зажимы позиционера находятся на восковой модели,




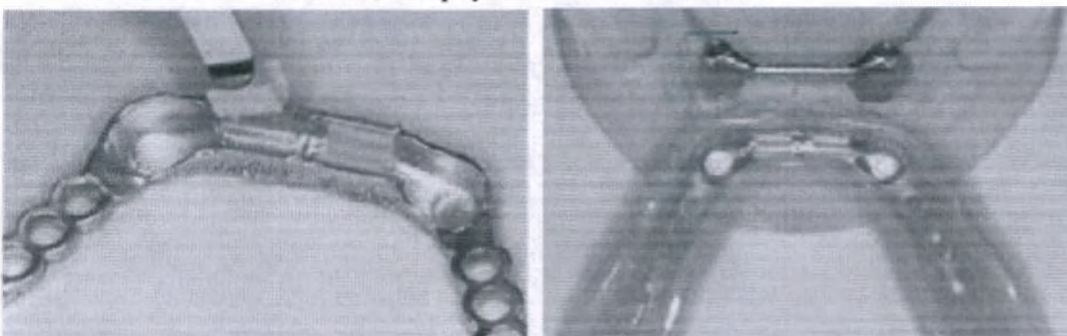Позже воск заполняется, и корпус становится отлитым.




Фиксирующий колпачок с соответствующей твердостью вставляется в литой металлический корпус. Затем подготавливается акриловый гибридный протез, который снимается с гипсовой модели с помощью балки и регулируется в соответствии с полостью рта пациента.

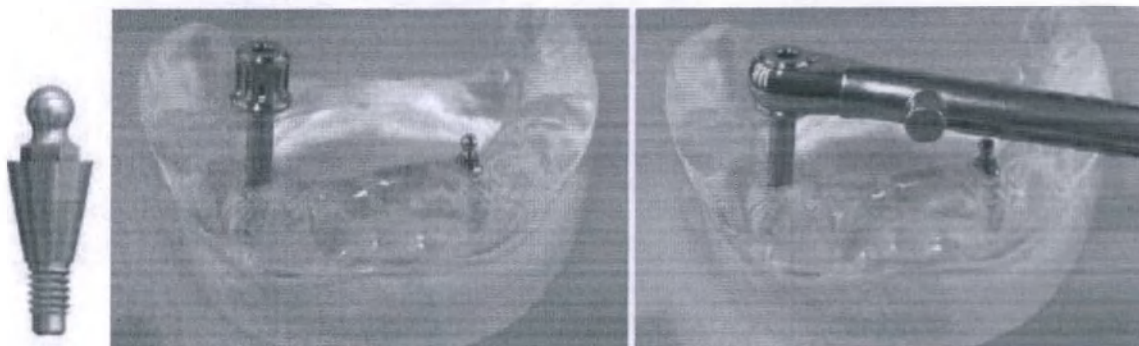СИСТЕМА ФИКСАЦИИ O-RING BALL;



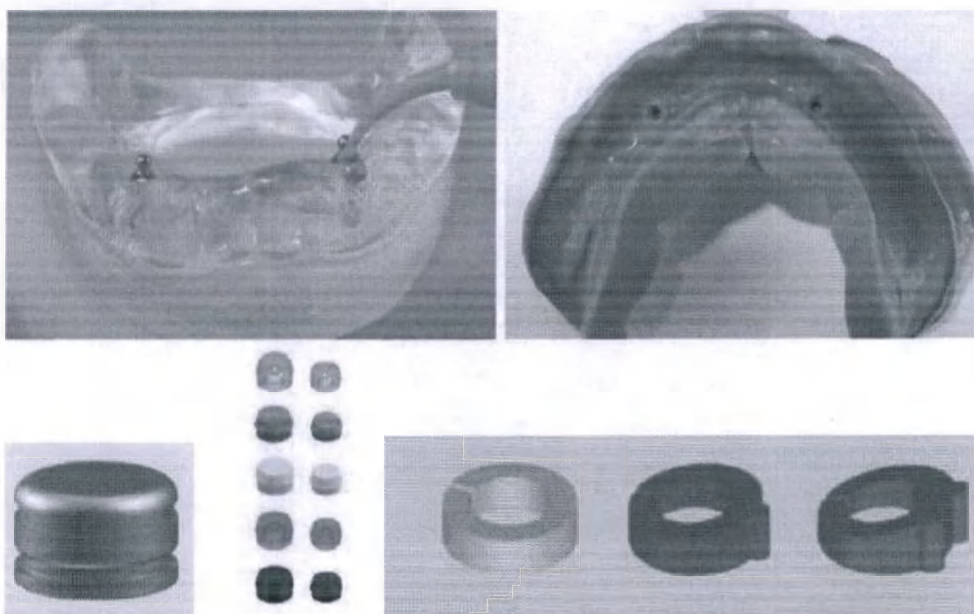После того, как выбран один из вариантов, основанный на высоте десны, 0,5 мм-1 мм-2 мм-3 мм-4 мм-6 мм, он (этот вариант) вводится в ротовую полость пациента и закручивается с помощью 25 Нсм.



АБАТМЕНТ PREMILL

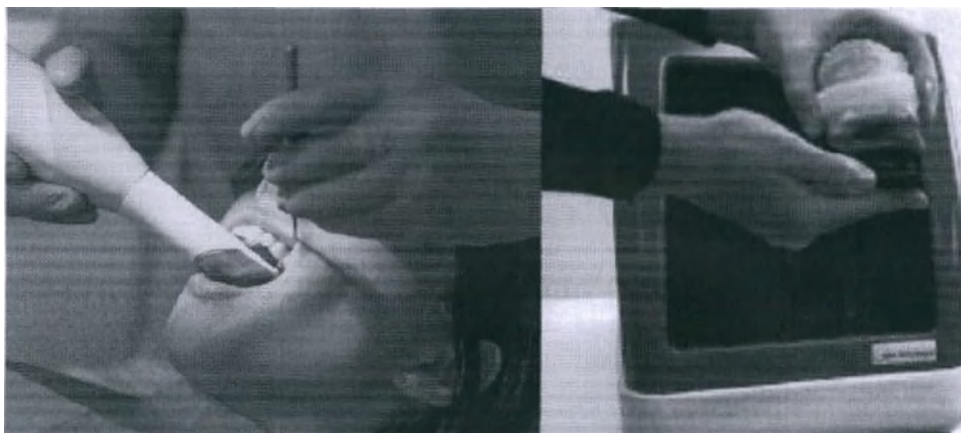
Всего существует 5 различных размеров необработанных абатментов Premill, включая диаметры 10 мм, 14 мм и 16 мм диаметра (S-BPA--) и диаметры 10 мм и 14 мм (S-BMPA--) для имплантатов уровня костной ткани.

А для имплантатов уровня мягкой ткани существует 6 различных размеров заготовок абатментов Premill, включая диаметры 10 мм, 14 мм и 16 мм (S-TPA--) и диаметры 10 мм, 14 мм и 16 мм (S-TWPA--).

Шаги протезирования с абатментом Premill описываются следующим образом:




Scan body фиксируется ко рту пациента или гипсовой модели.




Данные сканирования получают с помощью интраорального сканера или настольного сканера.



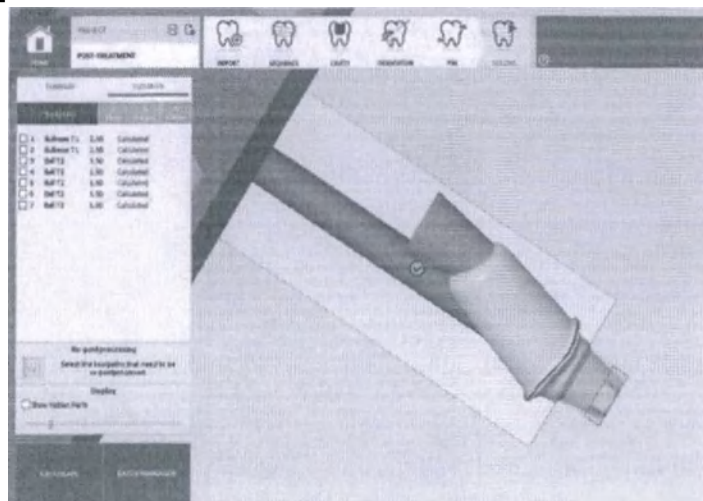
Коронки моделируются с помощью CAD-программы из валидационного фрезерного центра.



Коды вычисляются в САМ программе.

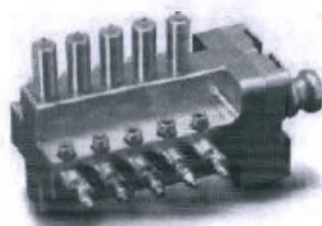

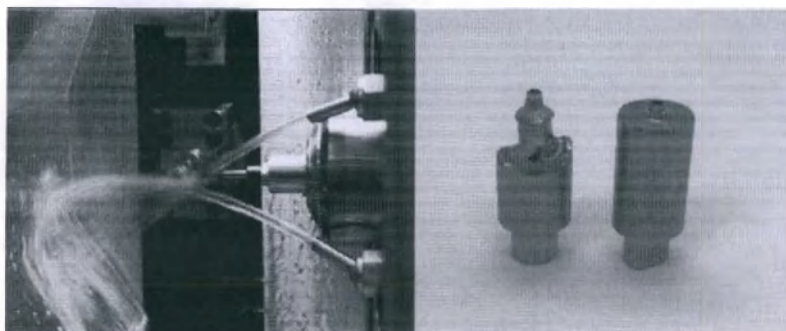Абатмент Premill крепится к держателю ЧПУ (в фрезерном станке).




Готовый индивидуальный абатмент получается из абатмента Premill после процесса обработки.

Индивидуальный абатмент устанавливается в ротовой полости пациента.

Супраструктура протеза цементируется к индивидуальному абатменту.

9.3. Протокол протезирования i-system

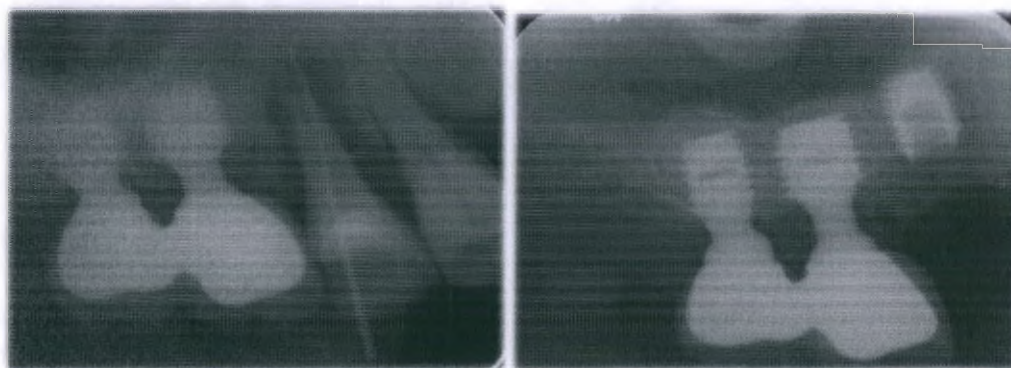
- Удаление не поддающегося лечению второго премоляра и установка имплантата i-system.



- Окклюзионный и боковой вид десны in situ.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

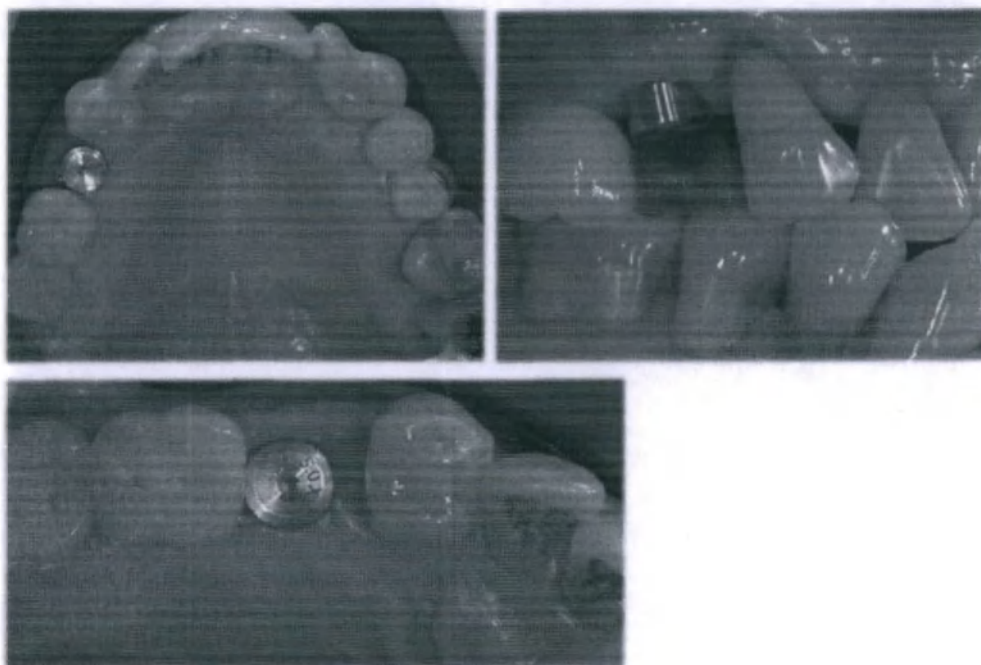
Страница 270 из 344



- Удалите формирователь десны с помощью щипцов, скручивая и вытягивая его, чтобы вытеснить его из лунки имплантата.




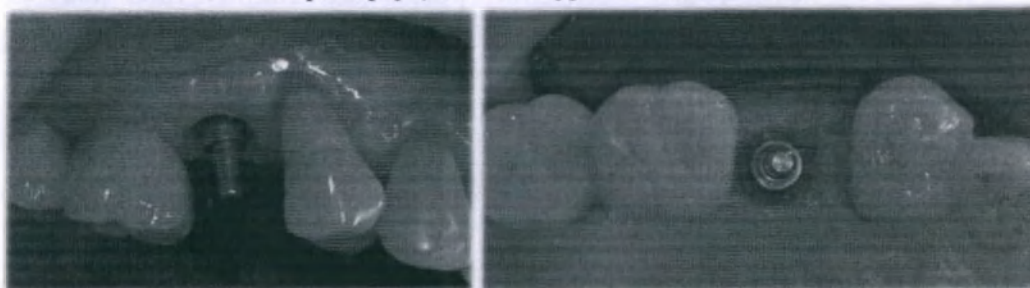- Поместите слепочный трансфер (слепок на уровне имплантата)




- Поместите слепочный колпачок поверх слепочного трансфера (слепок на уровне имплантата)

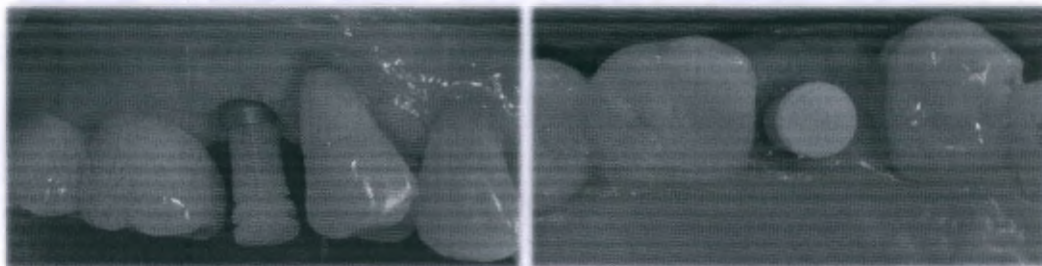
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



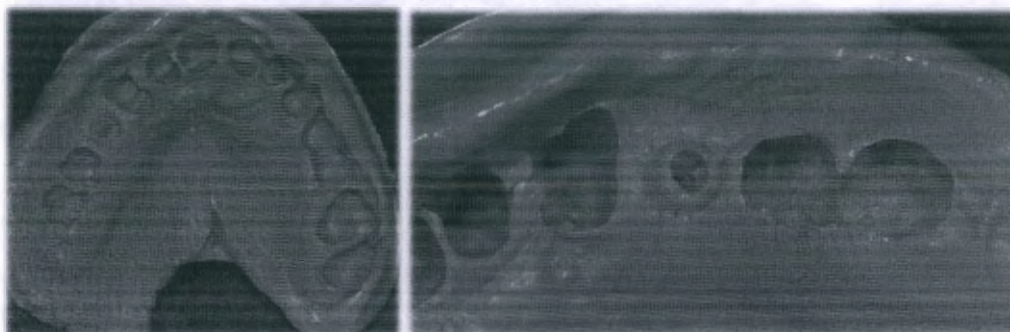- Сделайте оттиск с помощью слепочной ложки и полиэфирного слепочного материала средней консистенции.
- Слепочный колпачок снимается вместе со слепочным материалом.
- Слепочный трансфер останется в имплантате.
- После того как слепочный материал затвердеет, снимите слепок со рта пациента.
- Убедитесь, что копия слепка получилась идентичной.



- Снимите слепочный трансфер с имплантата, скручивая и вытягивая его, чтобы вытеснить его из лунки имплантата.
- Поместите лабораторный аналог имплантата нужного диаметра в слепочную копию.
- Соедините компоненты вместе, надавив на них.
- Убедитесь, что аналог надежно закреплен в слепке.
- Вставьте копию слепка / аналоговую сборку в оттиск, надавливая на нее до тех пор, пока она не погрузится на полную глубину.
- Слегка поверните копию / аналог, чтобы проверить наличие сопротивления вращению.

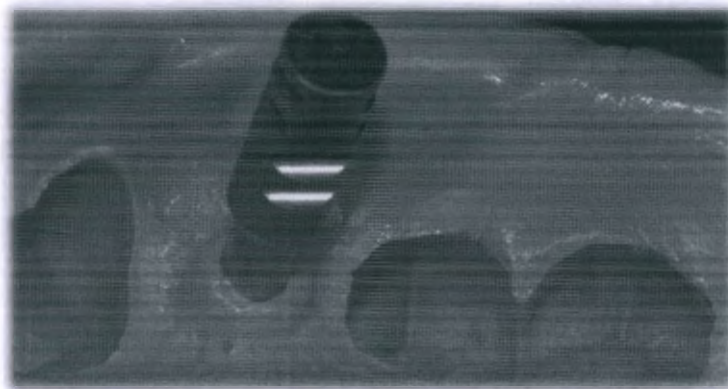

- Сделайте слепок противоположной челюсти.



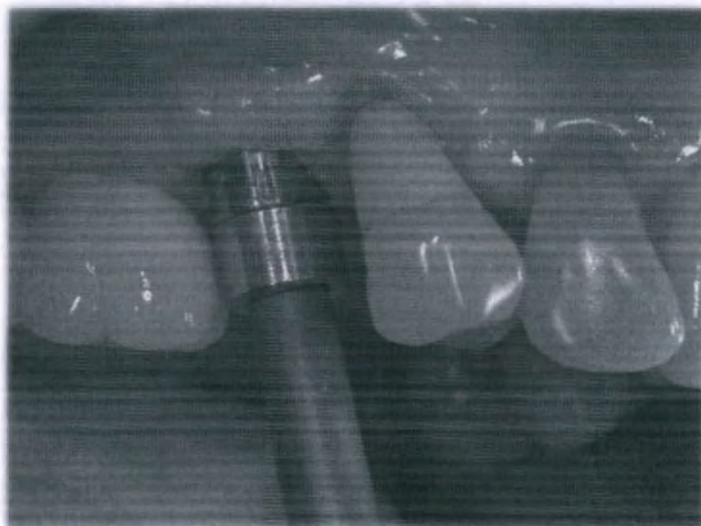
- Замените формирователь десны.




- Возможно, потребуется легкое постукивание, чтобы надежно соединить формирователь десны с имплантатом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 273 из 344



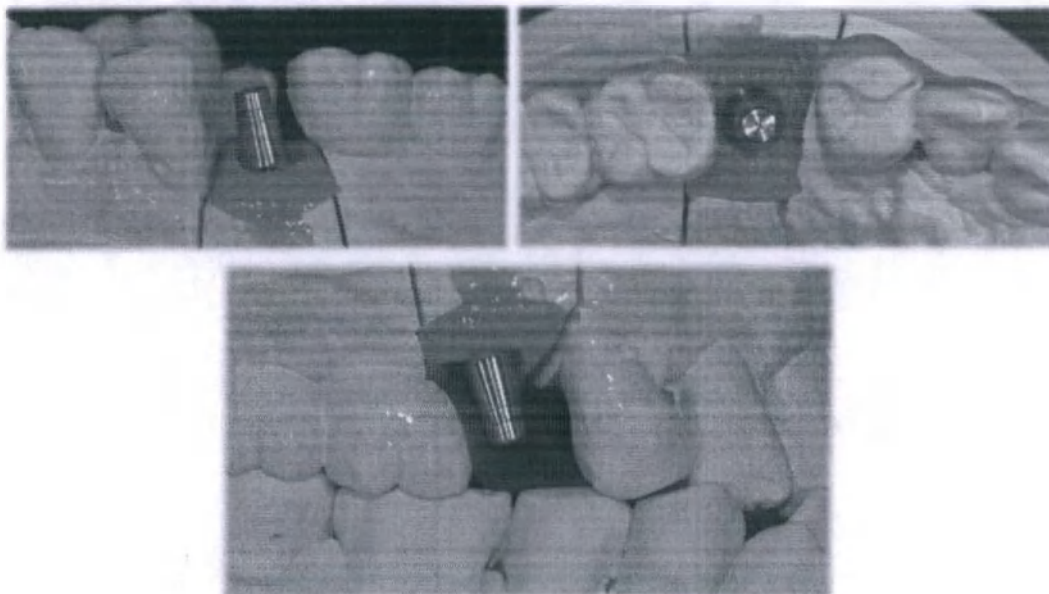
- Выберите соответствующий абатмент, основываясь на высоте его трансфера и свободном вертикальном пространстве.



- Фрезеруйте абатмент в пределах доступного углового диапазона, предлагаемого выбранным фрезерным конусом, в соответствии с траекторией ведения реставрации.



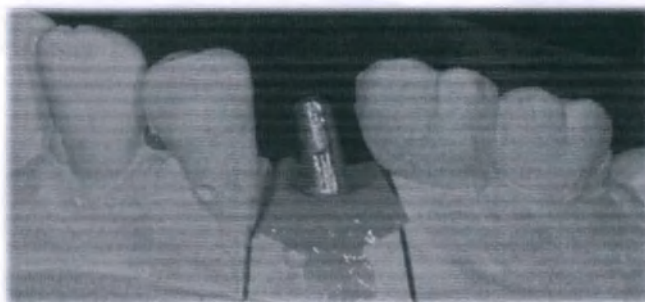
Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»



- Подготовьте проверочный зажим, используя специальную смолу с низкой усадкой.
- Проверочный зажим используется для проверки траектории вставки и облегчения ориентации и посадки абатмента для винтовых и индексных абатментов.



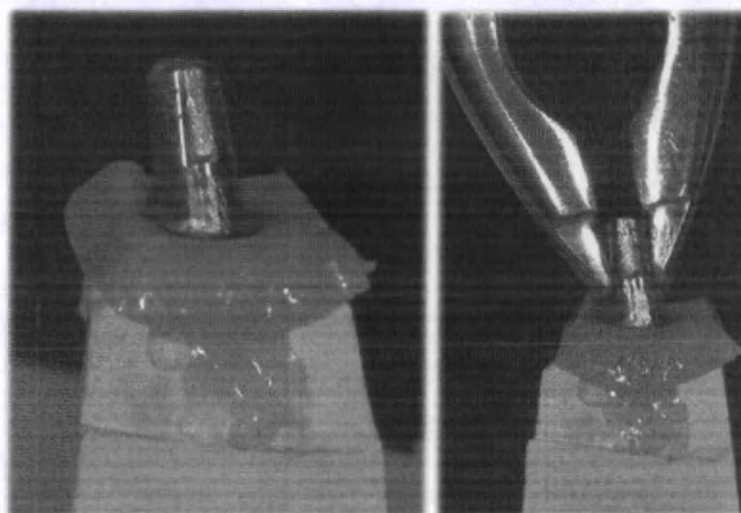- Извлеките абатмент из гипса с помощью щипцов, скручивая и вытягивая фрезерованный абатмент, чтобы вытеснить его из аналога имплантата.



Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 275 из 344

- Вставьте абатмент в проверочный зажим.



- Поместите проверочный зажим / узел абатмента в рот и проверьте правильность установки проверочного зажима.



- Снимите проверочный зажим и проверьте посадку абатмента.
- Абатмент не должен легко сниматься при вертикальном вытягивании.



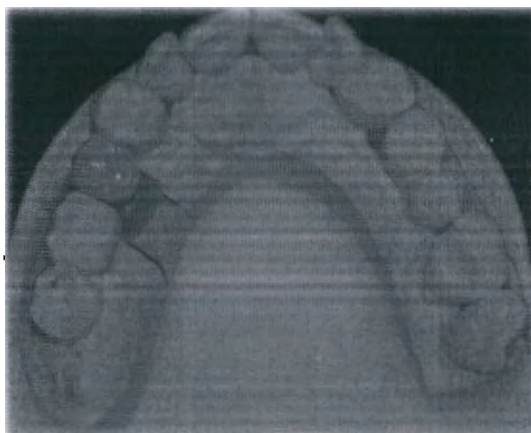
- Удалите абатмент с помощью щипцов, скручивая и вытягивая его, чтобы хорошо вытеснить его из имплантата, а затем замените его на формирователь десны.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»


Страница 276 из 344




- Подготовьте реставрацию, используя выбранный материал.




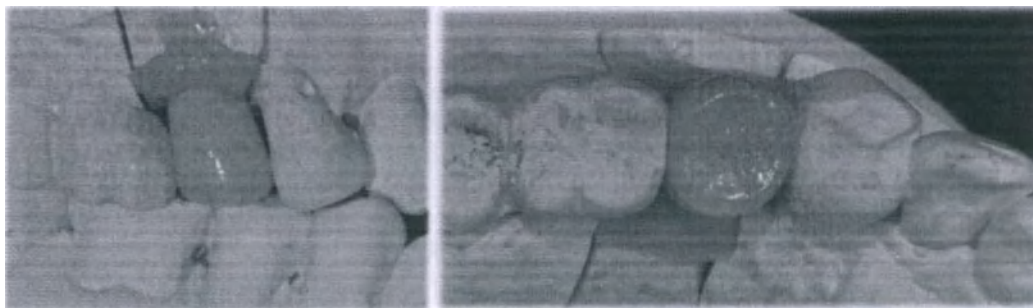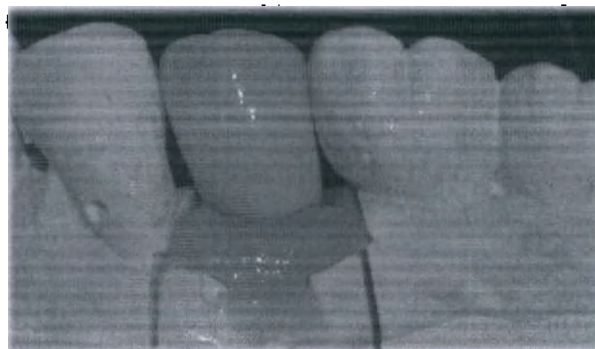- Проверьте контакты проксимального и окклюзионного соединений на гипсе.






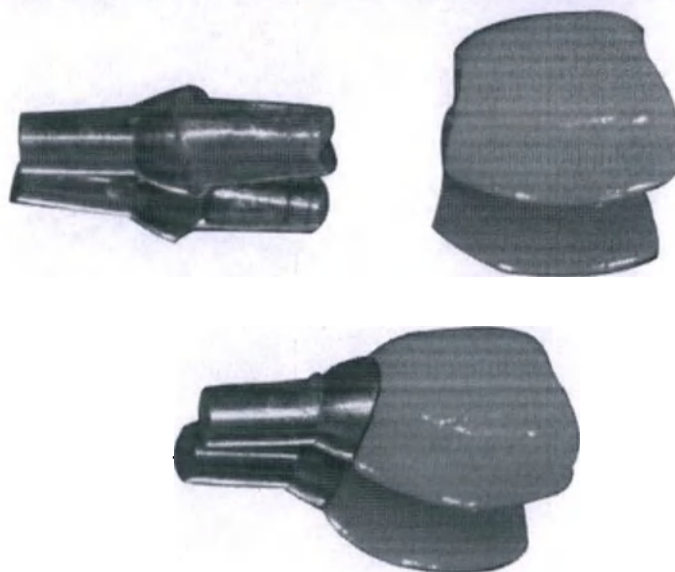- Снимите абатмент с гипса и поместите поверх него проверочный зажим.
- Затем проверочный зажим / абатментный узел следует поместить в рот.




- Извлеките проверочный зажим.

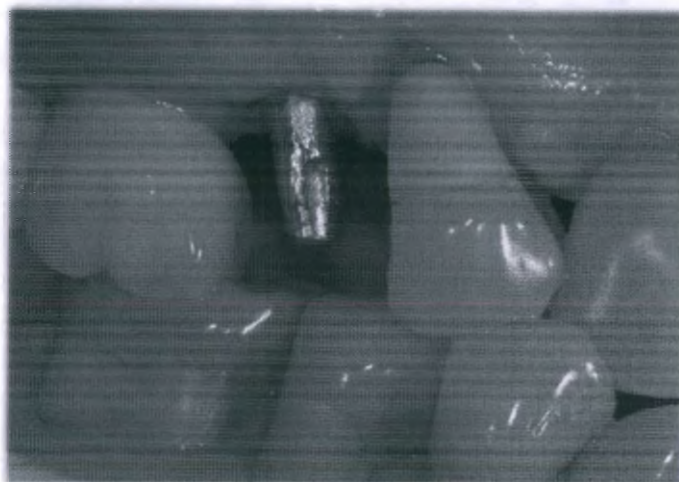

- Проверьте проксимальные и окклюзионные соединения в полости рта и внесите необходимые коррективы.



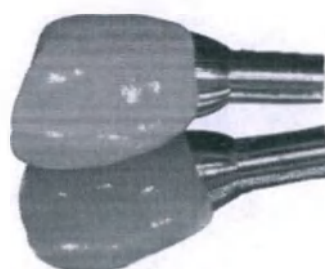- Зацементируйте реставрацию соответствующим абатментом экстраорально.
- Очистите излишки цемента спиртом и хлопковыми гранулами.
- Никакой металлический инструмент при этом не должен быть задействован.



- Поместите коронку / абатментный узел в рот.



- Дайте пациенту прикусить ватный валик, чтобы завершить посадку абатмента.



- Завершенное восстановленное место проведения операции.



- Сделайте рентген полученной реставрации.



10. Стерилизация

Ортопедические элементы поставляются нестерильными и их необходимо стерилизовать перед первым использованием.

Перед стерилизацией оригинальную упаковку следует удалить, а изделия, необходимо поместить в стерилизационные пакеты и запечатать после распаковки. Novodent SA рекомендует следующие процедуры стерилизации:
автоклавированием при $t\ 134^{\circ}\text{C}$ на протяжении 15 или 121°C на протяжении 20 минут перед использованием.

11. Сведения о комплектации, маркировке

11.1. Комплектация

№	Вид изделий	Комплектация
1.	Абатменты: S-BMCA37--, S-BCA--, S-BCAN--, S-BMCAN--, S-BMAA--, S-BAA--, S-BMAAN--, S-BAAN--, S-BMTA--, S-BTA--, S-BTAN--, S-TCA--, S-TCAW--, S-TCAN--, S-TCAWN--, S-TAA--, S-TMA, S-TMAN, S-TSOA, S-TSOAN, S-TTA--, S-TTAN--	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуются винтом
2.	Абатменты: S-BMUA--, S-BMMA--, S-BMA--, S-BMMAN--, S-BMAN--	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуются винтом и колпачком

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 281 из 344

3.	Абатменты: S-BMSA--, S-BSA--, S-BMLA--, S-BLA--, S-TSA--, S-TSAL--, S-TLA--, I-SLA--	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется колпачком
4.	Абатменты с остальными кодами	1 шт./индивидуальная упаковка
5.	Лабораторные аналоги	1 шт./индивидуальная упаковка
6.	Лабораторный аналог с выжигаемым колпачком и трансфером Monoimplant Impression Component (артикул MIC)	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется выжигаемым колпачком и трансфером
7.	Лабораторный аналог с выжигаемым колпачком и трансфером Monoimplant Impression Component (артикул MIC-Lab)	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется выжигаемым колпачком и трансфером
8.	Трансферы: S-BMICP--, S-BMICPN--, S-BICP--, S-BICPN--, S-BMICT--, S-BMICTN--, S-BICT--, S-BICTN--, S-TICP, S-TICPN, S-TICPW, S-TICPWN, S-TICT, S-TICTN, S-ICOAP, S-ICOAPN, S-ICOAT, S-ICOATN, S-BMSICT--, I-SMUAICP	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется направляющим пином
9.	Трансферы: S-BMICT--, S-BICT--, S-BICTN--, S-BICTN65Sc	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется винтом и колпачком
10.	Трансферы: S-TWSB, S-TSB, S-PSB, S-PMSB, S-PMUSB, S-POSB, I-SMUAPICyN	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется винтом
11.	Трансферы I-SIP--	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется колпачком
12.	Трансферы с остальными кодами	1 шт./индивидуальная упаковка
13.	Колпачки: S-OATICYN, S-MUAPICyN, S-OATICY, S-TOAPICy, S-TOAPICyN, S-OAPICy, S-OAPICyN, S-OAHCap, S-MUAHCap,	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется винтом
14.	Колпачки S-ORR, S-ORRc,	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется 2 дополнительными колпачками

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 282 из 344

15.	Колпачок S-ORRo	1 шт./индивидуальная упаковка, комплектуется 3 колпачками
16.	Колпачок S-LMHt	2 шт./ индивидуальная упаковка, комплектуется 2 колпачками
17.	Колпачок S-LRI	4 шт./ индивидуальная упаковка
18.	Колпачок S-EBOCap	5 шт./ индивидуальная упаковка, комплектуется 2 колпачками
19.	Колпачки с остальными кодами	1 шт./индивидуальная упаковка
20.	Балки	1 шт./индивидуальная упаковка
21.	Винты	1 шт./индивидуальная упаковка

Инструкция по применению вкладывается в индивидуальную упаковку.

11.2. Маркировка

На потребительской и транспортной упаковке располагается информация в достаточном объеме об изделии, производителе, статусе изделия, номере партии изделия. Все используемые символы взяты из согласованного стандарта EN ISO 15223-1.

Маркировка потребительской упаковки содержит следующую информацию:

- Наименование системы;
- Наименование изделия;
- Артикул модели;
- Дата производства;
- Размер изделия;
- Наименование и адрес производителя;
- Номер партии;
- Материал изготовления;

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 283 из 344

- Сделано в Швейцарии;
- Маркировка символами:

	Обратитесь к инструкции по применению		Дата изготовления
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер по каталогу		Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС
	Код партии		Не стерильно

Проект маркировки изделия на русском языке*

/Символ бренда изделия/ REF: /артикул изделия/ /наименование изделия/ /номер регистрационного удостоверения РФ/	
LOT: /код партии/  /Дата производства изделия/ Материал: Размер: Сделано в Швейцарии	  
 /адрес места производства/ /официальный дистрибьютор в РФ/	

**расположение и набор символов может меняться в зависимости от размера этикетки/вида упаковки*

12. Условия транспортировки и хранения медицинского изделия, срок хранения

Транспортировка возможна всеми типами транспортных средств на любые расстояния. Рекомендуемая температура транспортировки и хранения: от +15°C до +30°C.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 284 из 344

Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не подвергать замораживанию.

Перед применением необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений на упаковке и нарушении стерильности изделий

Не допускать воздействия органических растворителей, ионизирующего излучения или ультрафиолетовых лучей, так как это может привести к порче пластиков.

Срок годности нестерильных изделий не ограничен при соблюдении условий хранения и целостности упаковки.

13. Условия применения

Установка ортопедических элементов относится к амбулаторным оперативным вмешательствам, что подразумевает наличие определенных условий для выполнения операции и соответствующую предоперационную подготовку пациента.

Операцию следует проводить при строгом соблюдении правил асептики и антисептики, в отвечающем современным санитарно-гигиеническим нормам хирургическом кабинете (операционной), оснащенном соответствующим стоматологическому профилю оборудованием, инструментарием и мебелью.

Рекомендуемые условия применения изделий: при комнатной температуре, давлении, с влажностью воздуха в помещении клиники или стационара, температура тела пациента от +32°C до +42°C.

Компоненты ортопедические предназначены для одноразового использования. Запрещается использовать повторно.

14. Гарантия производителя

Компания Novodent SA, гарантирует, что данный продукт был произведен и упакован с должной аккуратностью, предписанной в Директиве ЕС 93/42/ЕЕС для медицинских изделий. Компания Novodent SA имеет сертификаты, свидетельствующие о том, что система менеджмента качества компании соответствует требованиям Приложения II (исключая раздел 4) Директивы 93/42/ЕЕС и ISO 13485:2016.

Изделия были индивидуально протестированы и тщательно проверены. Компания Novodent SA заменит любое изделие, в случае обнаружения дефектов, допущенных в ходе производства и упаковки (доказательства могут быть предоставлены), и сообщения о таких дефектах в компанию Novodent SA или ее уполномоченному представителю, или дистрибьюторам. Данная гарантия применяется вместо любой иной гарантии, устной или письменной, явно выраженной или подразумеваемой, а также исключает ее.

Для безопасного и эффективного использования ортопедических элементов, должно быть проведено специализированное обучение, в которое будет входить практическое обучение для изучения надлежащих техник, биомеханических требований и рентгенологической оценки.

Ответственность за правильный выбор пациента, надлежащее обучение и предоставление надлежащей информации для получения информируемого согласия лежит на стоматологе. Неисправное оборудование может привести к потере кости, поддерживающей зубы. Производитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный неправильной им-

плантационной терапией и/или несоблюдением требований, указанных в инструкции по применению.

В соответствии с требованиями стандарта ISO 13485:2016 разделы о сервисе и техническом обслуживании неприменимы, поскольку это одноразовое изделие для однократного применения.

Срок годности нестерильных изделий не ограничен при соблюдении условий хранения и целостности упаковки.

15. Технический ремонт и обслуживание

Техническому ремонту и обслуживанию не подлежит.

16. Перечень применяемых национальных и международных стандартов

Директива 93/42/ЕЕС

Медицинские изделия, устройства, оборудование

EN ISO 15223-1:2016

Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования.

EN ISO 14971:2012

Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

EN 1041:2008+A1:2013

Информация, предоставляемая изготовителем медицинских изделий.

EN ISO 11607-1:2017

Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам.

EN ISO 11607-2:2017

Упаковка медицинских изделий, стерилизуемых на завершающей стадии производства - Часть 2: Требования к оценке процессов формирования, герметизации и сборки.

EN ISO 5832-3: 2016

Имплантаты для хирургии - Металлические материалы - Часть 3: Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия.

ISO 5832-2:2018

Имплантаты для хирургии - Металлические материалы - Часть 2: Нелегированный титан

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 286 из 344

EN 1642:2011

Стоматология. Медицинские изделия для стоматологических целей. Имплантаты дентальные.

EN 1641:2009

Стоматология. Медицинские изделия для стоматологических целей. Материалы.

ISO 11737-2: 2009

Стерилизация медицинских изделий - Микробиологические методы - Часть 2: Испытание на стерильность, проводимое при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации

EN ISO 11737-1:2018

Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции

EN ISO 10451:2010

Системы дентальных имплантатов. Содержание технического файла.

EN ISO 14801:2016

Стоматология. Имплантаты. Испытание под динамической нагрузкой эндооссальных дентальных имплантатов

MEDDEV 2.7/1 rev.4 June 2016

Клиническая оценка: Руководство для производителей и уполномоченных органов.

MEDDEV 2.12/1 rev.8 January 2013

Система контроля медицинский изделий.

MEDDEV 2.12/2 rev.2 January 2012

Пострегистрационные клинические исследования.

EN ISO 14155:2011

Клинические исследования медицинских изделий для людей - Надлежащая клиническая практика.

EN 62366-1:2015/AC:2016

Изделия медицинские - Часть 1: Применение инженерных технологий в медицинских изделиях

EN ISO 14602:2011

Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для остеосинтеза. Частные требования

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 287 из 344

EN ISO 14644-1:2015

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 1: Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц.

EN ISO 14644-2:2015

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 2: Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц.

EN ISO 14644-3:2019

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 3: Методы испытаний.

EN ISO 14644-4:2001

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 4: Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.

EN ISO 14644-5:2004

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 5: Эксплуатация

EN ISO 14698-1:2003

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений – Часть 1: Общие принципы и методы

EN ISO 14698-2:2003/AC:2006

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений – Часть 2: Анализ данных о биозагрязнениях

EN ISO 14644-6:2007

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 6: Термины.

EN ISO 13485:2016

Изделия медицинские - Системы менеджмента качества - Требования к регулированию.

EN 17141:2020

Чистые помещения и соответствующие контролируемые условия. Контроль уровня биологического загрязнения.

EN ISO 17665-1:2006

Стерилизация медицинской продукции. Стерилизация паром. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

TSE CEN ISO / TS 17665- 2: 2009

Стерилизация медицинской продукции - Влажное тепло - Часть 2: Руководство по применению ISO 17665-1

ASTM F 1980:16

Стандартное руководство по ускоренному изнашиванию стерильных барьерных систем для медицинских изделий

ASTM F86- 13

Стандартная практика подготовки поверхности и маркировки металлических хирургических имплантатов.

ASTM B600-11

Стандартное руководство для удаления окислы и очистки поверхностей из титана и титановых сплавов.

EN ISO 14630:2012

Имплантаты хирургические неактивные - Общие требования.

EN ISO 7405:2018

Стоматология. Оценка биологической совместимости медицинских изделий, используемых в стоматологии.

ISO/TS 13498:2011

Стоматология - Испытание на крутящий момент сочленений имплантата с соединительной деталью системы дентального имплантата.

EN ISO 17664:2017

Обработка продуктов медицинского назначения. Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий для обработки медицинских изделий

ASTM F67- 13(2017)

Стандартная спецификация для нелегированного титана для хирургических имплантатов.

ASTM F136:13

Стандартная спецификация для сплава титана 6-алюминия и 4-ванадия ELI (Extra Low Interstitial) для хирургических имплантатов.

EN ISO 10993-1:2009

Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

EN ISO 10993-3:2014

Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 3: Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию.

EN ISO 10993-5:2009

Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

EN ISO 10993-6:2016

Оценка биологического действия - Часть 6: Исследования местного действия после имплантации.

EN ISO 10993-10:2013

Оценка биологического действия - Часть 10: Исследования раздражающего и sensibilizing действия.

EN ISO 10993-11:2018

Оценка биологического действия - Часть 11: Исследования общетоксического действия.

17. Данные для утилизации или уничтожения медицинского изделия

Утилизация должна производиться в соответствии с законодательными и местными нормативами, а также протоколами медицинского учреждения.

По классу опасности медицинских отходов при утилизации медицинское изделие «Компоненты ортопедические Novodent» может быть отнесено к эпидемиологически опасным медицинским отходам (класс Б): материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.

В случае применения данной продукции в отношении пациентов инфицированных особо опасными заболеваниями - относится к чрезвычайно эпидемиологически опасным отходам (класс В), т.е. к материалам, контактирующим с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и требует проведения мероприятий по санитарной охране территории.

Неиспользованные медицинские изделия, не контактирующие с кровью и слизистыми, следует утилизировать, как эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (класс А).

18. Уполномоченный представитель в РФ

Уполномоченный представитель компании Novodent SA (Швейцария) на территории РФ для приема рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «МедТест-М» (ООО «МедТест-М»),
адрес: Россия, 125414, г. Москва, ул. Клинская, дом 6, стр. 1, офис. 310, телефон: +7 (499)
995-10-68, email: medtest-m@yandex.ru

19. Состав медицинского изделия

Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения:

1. Абатменты – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом:
 - 1.1 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3710) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
 - 1.2 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3720) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
 - 1.3 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3730) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
 - 1.4 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3740) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
 - 1.5 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA3750) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
 - 1.6 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA37107) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
 - 1.7 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA37207) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 291 из 344

- 1.8 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm, Over Gingival margin height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA37307) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.9 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA37407) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.10 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCA37507) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.11 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.12 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.13 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.14 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.15 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA4550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.16 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.17 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.18 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 292 из 344

- 1.19 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5540) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.20 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA5550) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.21 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6510) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.22 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6520) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.23 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6530) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.24 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6540) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.25 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA6550) –
1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.26 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45107) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.27 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45207) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.28 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45307) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.29 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45407) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 293 из 344

- 1.30 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA45507) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.31 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA55107) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.32 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA55207) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.33 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA55307) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.34 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA55407) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.35 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA55507) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.36 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA65107) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.37 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA65207) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.38 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA65307) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.39 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA65407) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.40 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm, Over Gingival Margin Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BCA65507) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 294 из 344

- 1.41 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3710) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.42 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3720) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.43 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3730) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.44 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3740) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.45 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMCAN3750) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.46 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.47 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.48 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.49 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.50 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN4550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.51 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN5510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 295 из 344

- 1.52 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN5520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.53 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN5530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.54 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN5540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.55 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN5550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.56 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.57 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.58 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.59 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.60 Абатмент Implantswiss Bone Level Couple Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BCAN6550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.61 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAA37151) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.62 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAA37152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 296 из 344

- 1.63 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAA37154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.64 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA45152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.65 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA45154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.66 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA45252) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.67 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA45254) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.68 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.69 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.70 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55252) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.71 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA55254) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.72 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA65152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.73 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA65154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 297 из 344

- 1.74 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA65252) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.75 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAA65254) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.76 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAAN37151) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.77 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAAN37152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.78 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAAN37154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.79 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN45152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.80 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN45154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.81 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN45252) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.82 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN45254) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.83 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN55152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.84 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN55154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 298 из 344

- 1.85 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN55252) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.86 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN55254) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.87 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN65152) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.88 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 15°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN65154) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.89 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN65252) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.90 Абатмент Implantswiss Bone Level Angled Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Angle - 25°, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BAAN65254) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом.
- 1.91 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 17°, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48172) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.92 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 17°, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48173) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.93 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 35°, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48352) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.94 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Angle - 35°, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMUA48353) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.95 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Length - 1.5 mm NON STERILE (артикул S-BMMA37) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.

- 1.96 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMA45) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.97 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMA55) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.98 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Multi Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Length - 1.5 mm NON STERILE (артикул S-BMMAN37) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.99 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAN45) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.100 Абатмент Implantswiss Bone Level Multi Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMAN55) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются винтом и колпачком.
- 1.101 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA10) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.102 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA20) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.103 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA30) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.104 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA40) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.105 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMOA50) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.106 Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BOA10) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.107 Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BOA20) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.108 Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BOA30) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.109 Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BOA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.110 Абатмент Implantswiss Bone Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 4.8 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BOA50) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.111 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 2.9 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-BMORA05) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.112 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMORA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.113 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMORA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.114 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.42 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-BORA05) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.115 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.42 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.116 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.117 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.118 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.119 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 6.0 mm NON STERILE (артикул S-BORA60) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.120 Абатмент Implantswiss Bone Level Superb Overdenture Mini Abutment, Dimensions: Diameter - 2.9 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-BMEBA05) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.121 Абатмент Implantswiss Bone Level Superb Overdenture Mini Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMEBA20) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.122 Абатмент Implantswiss Bone Level Superb Overdenture Mini Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMEBA40) – 1 шт./ индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.123 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.42 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.124 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.125 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.126 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.127 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA50) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.128 Абатмент Implantswiss Bone Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 6.0 mm NON STERILE (артикул S-BEBA60) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.129 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3710) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.130 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3720) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.131 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3730) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.132 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3740) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.133 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMSA3750) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.134 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.135 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 302 из 344

- шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.136 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.137 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.138 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA4550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.139 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA5510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.140 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA5520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.141 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA5530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.142 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA5540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.143 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA5550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.144 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA6510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.145 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA6520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.146 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA6530) – 1

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 303 из 344

шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.

- 1.147 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA6540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.148 Абатмент Implantswiss Bone Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BSA6550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.149 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3725) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.150 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3735) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.151 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3750) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.152 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Gingival Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-BMHA3770) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.153 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.154 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.155 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.156 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.157 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA4550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.158 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.159 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 304 из 344

- 1.160 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.161 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.162 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA5550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.163 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6510) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.164 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6520) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.165 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6530) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.166 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6540) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.167 Абатмент Implantswiss Bone Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Gingival Height - 5.0 mm NON STERILE (артикул S-BHA6550) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.168 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment. Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Length - 13.44 mm. NON STERILE (артикул S-BMTA37) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.169 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTA45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.170 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.171 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTA65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.172 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTAN45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 305 из 344

- 1.173 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTAN55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.174 Абатмент временный Implantswiss Bone Level Temporary Abutment Non-Hex, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 13.44 mm NON STERILE (артикул S-BTAN65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.175 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86.0 mm, Gingival Height - 1.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA15) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.176 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA25) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.177 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA35) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.178 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 4.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.179 Абатмент Implantswiss Bone Level Mini Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-BMLA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.180 Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 1.5 mm NON STERILE (артикул S-BLA15) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.181 Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-BLA25) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.182 Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-BLA35) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.183 Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 4.5 mm NON STERILE (артикул S-BLA45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

- 1.184 Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-BLA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.185 Абатмент Implantswiss Bone Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Gingival Height - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BLA65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.186 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCA10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.187 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.188 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCA30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.189 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.190 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.191 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.192 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.193 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAW40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.194 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 307 из 344

- 1.195 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.196 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.197 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAN40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.198 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.199 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.200 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.201 Абатмент Implantswiss Tissue Level Couple Abutment Wide Non-Octa, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TCAWN40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.202 Абатмент Implantswiss Tissue Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул S-TAA15) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.203 Абатмент Implantswiss Tissue Level Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 3.7 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул S-TAA25) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.204 Абатмент Implantswiss Tissue Level Multi Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Length - 13.5 mm NON STERILE (артикул S-TMA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.205 Абатмент Implantswiss Tissue Level Multi Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Length - 13.5 mm NON STERILE (артикул S-TMAN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.206 Абатмент Implantswiss Tissue Level Octa Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Length - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-TOA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 308 из 344

- 1.207 Абатмент Implantswiss Tissue Level SynOcta Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Length - 8.8 mm NON STERILE (артикул S-TSOA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.208 Абатмент Implantswiss Tissue Level SynOcta Abutment NON-OCTA, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Length - 8.8 mm NON STERILE (артикул S-TSOAN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.209 Абатмент Implantswiss Tissue Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-TORA05) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.210 Абатмент Implantswiss Tissue Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TORA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.211 Абатмент Implantswiss Tissue Level O-Ring Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TORA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.212 Абатмент Implantswiss Tissue Level Superb Overdenture Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 0.5 mm NON STERILE (артикул S-TEBA05) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.213 Абатмент Implantswiss Tissue Level Superb Overdenture Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TEBA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.214 Абатмент Implantswiss Tissue Level Superb Overdenture Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TEBA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.215 Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TSA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.216 Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-TSA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.217 Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment, Dimensions: Diameter - 3.5 mm, Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-TSA70) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.218 Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large, Dimensions: Diameter - 4.3 mm, Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TSAL40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.219 Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large, Dimensions: Diameter - 4.3 mm, Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-TSAL55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.220 Абатмент Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large, Dimensions: Diameter - 4.3 mm, Height - 7.0 mm NON STERILE (артикул S-TSAL70) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.

- 1.221 Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-THA30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.222 Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-THA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.223 Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-THA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.224 Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-THAW30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.225 Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-THAW40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.226 Абатмент Implantswiss Tissue Level Healing Abutment Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-THAW55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.227 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TTA10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.228 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TTA20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.229 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-TTA30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.230 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TTA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.231 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 1.0 mm NON STERILE (артикул S-TTAN10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.232 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-TTAN20) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.233 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 3.0 mm NON STERILE (артикул S-

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 310 из 344

- TTAN30) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.234 Абатмент временный Implantswiss Tissue Level Temporary Abutment Non-Octa, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-TTAN40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 1.235 Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 1.5 mm NON STERILE (артикул S-TLA15) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.236 Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 2.5 mm NON STERILE (артикул S-TLA25) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.237 Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-TLA35) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.238 Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 4.5 mm NON STERILE (артикул S-TLA45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.239 Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-TLA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.240 Абатмент Implantswiss Tissue Level Locator Abutment, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Gingival Height - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-TLA65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 1.241 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.242 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.243 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.244 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.245 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.246 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.247 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.248 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.249 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.250 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.251 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.252 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.253 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA1040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.254 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA1050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.255 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA2040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.256 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA2050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.257 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA3040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.258 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA3050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.259 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA4040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.260 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA4050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.261 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA5040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.262 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA5050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.263 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA6040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.264 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SSA6050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.265 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.266 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA1065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.267 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.268 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA2065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.269 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.270 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA3065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.271 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.272 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA4065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.273 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.274 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA5065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.275 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.276 Абатмент i-system Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SSA6065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.277 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2040-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.278 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2050-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.279 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4040-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.280 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4050-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.281 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6040-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.282 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6050-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.283 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2040-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.284 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2050-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.285 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4040-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.286 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4050-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.287 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6040-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.288 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6050-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.289 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2050-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.290 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA2065- 15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.291 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4050-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.292 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA4065-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.293 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6050-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.294 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SSAA6065-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.295 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2040-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.296 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2050-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.297 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4040-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.298 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4050-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.299 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6040-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.300 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6050-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.301 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2040-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.302 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2050-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.303 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4040-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.304 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4050-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.305 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6040-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.306 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6050-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.307 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2050-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.308 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA2065-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.309 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4050-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.310 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA4065-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.311 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению. Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6050-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.312 Абатмент i-system Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SSAA6065-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.313 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.314 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.315 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.316 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.317 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.318 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.319 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.320 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.321 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.322 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.323 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.324 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.325 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.326 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.327 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.328 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.329 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.330 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.331 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.332 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.333 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.334 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.335 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.336 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.337 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.338 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA1065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.339 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.340 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA2065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.341 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.342 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA3065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.343 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.344 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA4065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.345 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.346 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA5065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.347 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.348 Абатмент i-system Non-Shouldered Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SNSA6065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.349 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.350 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.351 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.352 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.353 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.354 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050-15(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.355 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.356 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 319 из 344

- 1.357 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.358 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.359 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.360 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050-15(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.361 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.362 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA2065- 15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.363 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.364 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA4065-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.365 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.366 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 15° NON STERILE (артикул I-SNSAA6065-15(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.367 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.368 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.369 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.370 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.371 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.372 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050-25(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.373 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2040-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.374 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.375 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4040-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.376 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.377 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6040-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.378 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050-25(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.379 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2050-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.380 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA2065- 25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.381 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4050-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.382 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA4065- 25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.383 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6050-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.384 Абатмент i-system Non-Shouldered Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 7.5 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm, Angle - 25° NON STERILE (артикул I-SNSAA6065-25(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.385 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.386 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.387 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.388 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.389 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.390 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.391 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.392 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.393 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.394 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.395 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6040(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.396 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.397 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA1040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.398 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA1050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.399 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA2040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.400 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA2050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.401 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA3040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.402 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA3050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.403 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA4040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.404 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA4050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.405 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA5040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.406 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA5050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.407 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 4.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA6040(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.408 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SHA6050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.409 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.410 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA1065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.411 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.412 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA2065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.413 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.414 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA3065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.415 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.416 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA4065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.417 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.418 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA5065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.419 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.420 Абатмент i-system Healing Abutment, Dimensions: Diameter - 6.5 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SHA6065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.421 Абатмент i-system Sinus Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.5 mm, Well - 3.0 mm STERILE (артикул I-SSINA5065(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.422 Абатмент i-system Sinus Abutment, Dimensions: Diameter - 6.0 mm, Length - 7.5 mm, Well - 3.0 mm STERILE (артикул I-SSINA6075(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.423 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA10(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.424 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA20(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.425 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA30(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.426 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA40(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.427 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA50(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.428 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA60(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.429 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA10(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.430 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA20(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.431 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA30(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.432 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA40(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.433 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA50(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.434 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SBA60(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.435 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA10(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.436 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA20(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.437 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA30(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.438 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA40(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.439 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA50(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.440 Абатмент i-system Ball Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SBA60(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.441 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.442 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.443 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.444 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.445 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.446 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.447 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.448 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.449 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.450 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.451 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.452 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.5 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.453 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.454 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 326 из 344

- 1.455 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.456 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.457 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.458 Абатмент i-system Multi Unit Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.459 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-17(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.460 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-33(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.461 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA2050-17(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.462 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA2050-33(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.463 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA3050-17(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.464 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA3050-33(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.465 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA4050-17(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.466 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA4050-33(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.467 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA5050-17(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.468 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA5050-33(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.469 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA6050-17(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.470 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm, Well - 2.0 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA6050-33(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.471 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-17(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.472 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 33° NON STERILE (артикул I-SMUA1050-33(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.473 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm, Well - 2.5 mm, Angle - 17° NON STERILE (артикул I-SMUA2050-17(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.474 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050-33(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.475 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-17(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.476 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-33(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.477 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-17(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.478 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-33(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.479 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-17(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.480 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-33(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.481 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-17(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.482 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-33(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 1.483 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050-17(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.484 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA1050-33(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.485 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050-17(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.486 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA2050-33(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.487 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-17(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.488 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA3050-33(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.489 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-17(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.490 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA4050-33(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.491 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-17(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.492 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA5050-33(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.493 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-17(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.494 Абатмент i-system Multi Unit Angled Abutment, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SMUA6050-33(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 1.495 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA10(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.496 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA20(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 329 из 344

- 1.497 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA30(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.498 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA40(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.499 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA50(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.500 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA60(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.501 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA10(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.502 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA20(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.503 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA30(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.504 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA40(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.505 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA50(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.506 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA60(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.507 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA10(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.508 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA20(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.509 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA30(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
- 1.510 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA40(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.

- 1.511 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 5.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA50(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
 - 1.512 Абатмент i-system Locater Abutment, Dimensions: Diameter - 3.86 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SLA60(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуются колпачком.
 - 1.513 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA1045(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.514 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA2045(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.515 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA3045(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.516 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA1045(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.517 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA2045(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.518 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA3045(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.519 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 1.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA1045(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.520 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA2045(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 1.521 Абатмент i-system Ti-Base Abutment, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 3.0 mm NON STERILE (артикул I-STiA3045(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
-
2. Лабораторные аналоги:
 - 2.1 Лабораторный аналог Bone Level Mini Fixture Lab-Analog (артикул S-BMFLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 2.2 Лабораторный аналог Bone Level Fixture Lab-Analog (артикул S-BFLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 2.3 Лабораторный аналог Bone Level Mini Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BMSALA37) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 2.4 Лабораторный аналог Bone Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BSALA45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 331 из 344

- 2.5 Лабораторный аналог Bone Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BSALA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.6 Лабораторный аналог Bone Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-BSALA65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.7 Лабораторный аналог Tissue Level Fixture Lab-Analog (артикул S-TFLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.8 Лабораторный аналог Tissue Level Fixture Large Lab-Analog (артикул S-TFLLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.9 Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-TSALA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.10 Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-TSALA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.11 Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Lab-Analog (артикул S-TSALA70) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.12 Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Large Lab-Analog (артикул S-TSALLA40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.13 Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Large Lab-Analog (артикул S-TSALLA55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.14 Лабораторный аналог Tissue Level Solid Abutment Large Lab-Analog (артикул S-TSALLA70) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.15 Лабораторный аналог O-Ring Lab Analog (артикул S-ORLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.16 Лабораторный аналог Bone Level Mini Locator Lab-Analog (артикул S-BMLLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.17 Лабораторный аналог Bone Level Locator Lab-Analog (артикул S-BLLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.18 Лабораторный аналог Tissue Level Mini Locator Lab-Analog (артикул S-TLLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.19 Лабораторный аналог Octa Abutment Lab-Analog (артикул S-OALA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.20 Лабораторный аналог Bone Level Multi Unit Abutment Lab Analog (артикул S-BMUALA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.21 Лабораторный аналог Mono Implant Lab Analog (артикул MLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.22 Лабораторный аналог Mono Implant Lab Analog (артикул MLA-LAb) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.23 Пин аналога абатмента Tissue Level Shoulder Analog Pin (артикул S-TShAPin) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.24 Лабораторный аналог i-system Shouldered Abutment Analog (артикул I-SSAA4065) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.25 Лабораторный аналог i-system Shouldered Abutment Analog (артикул I-SSAA5065) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.26 Лабораторный аналог i-system Fixture Analog (артикул I-SFA (2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 332 из 344

- 2.27 Лабораторный аналог i-system Fixture Analog (артикул I-SFA (2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.28 Лабораторный аналог i-system Fixture Analog (артикул I-SFA (3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.29 Лабораторный аналог i-system Locator Abutment Analog (артикул I-SLAA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.30 Лабораторный аналог i-system Ball Abutment Analog (артикул I-SBAA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.31 Лабораторный аналог i-system Shouldered Abutment Analog (артикул I-SSAA6565) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.32 Лабораторный аналог Excellent Ball Lab-Analog (артикул S-EBLA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.33 Лабораторный аналог i-system Multi Unit Abutment Lab Analog (артикул I-SMUALA) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 2.34 Лабораторный аналог с выжигаемым колпачком и трансфером Monoimplant Impression Component (артикул MIC) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется выжигаемым колпачком и трансфером.
- 2.35 Лабораторный аналог с выжигаемым колпачком и трансфером Monoimplant Impression Component (артикул MIC-Lab) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется выжигаемым колпачком и трансфером.

- 3. Трансферы:
 - 3.1 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Long (артикул S-BMICP37L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
 - 3.2 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Short (артикул S-BMICP37S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
 - 3.3 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Non-Hex Long (артикул S-BMICPN37L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
 - 3.4 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Pickup Non-Hex Short (артикул S-BMICPN37S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
 - 3.5 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Long (артикул S-BICP45L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
 - 3.6 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Short (артикул S-BICP45S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
 - 3.7 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Long (артикул S-BICP55L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 333 из 344

- 3.8 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Short (артикул S-BICP55S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.9 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Long (артикул S-BICP65L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.10 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Short (артикул S-BICP65S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.11 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Long (артикул S-BICPN45L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.12 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Short (артикул S-BICPN45S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.13 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Long (артикул S-BICPN55L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.14 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Short (артикул S-BICPN55S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.15 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Long (артикул S-BICPN65L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.16 Трансфер Bone Level Impression Coping Pickup Non-Hex Short (артикул S-BICPN65S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.17 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Long (артикул S-BMICT37L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.18 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Short (артикул S-BMICT37S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.19 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Non-hex Long (артикул S-BMICTN37L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.20 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BMICTN37S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.21 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT45L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.

- 3.22 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT45S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.23 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT55L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.24 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT55S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.25 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT65L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.26 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT65S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.27 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN45L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.28 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN45S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.29 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN55L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.30 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN55S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.31 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN65L) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.32 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN65S) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.33 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Long (артикул S-BMICT37Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.34 Трансфер Bone Level Mini Impression Coping Transfer Short (артикул S-BMICT37Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.35 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT45Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.

- 3.36 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT45Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.37 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT55Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.38 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT55Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.39 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Long (артикул S-BICT65Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.40 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Short (артикул S-BICT65Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.41 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN45Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.42 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN45Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.43 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN55Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.44 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN55Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.45 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Long (артикул S-BICTN65Lc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.46 Трансфер Tissue Level Impression Coping Pickup (артикул S-TICP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.47 Трансфер Tissue Level Impression Coping Pickup Non-Octa (артикул S-TICPN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.48 Трансфер Tissue Level Impression Coping Pickup Wide (артикул S-TICPW) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.49 Трансфер Tissue Level Impression Coping Pickup Wide Non-Octa (артикул S-TICPWN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.

- 3.50 Трансфер Tissue Level Impression Coping Transfer (артикул S-TICT) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.51 Трансфер Tissue Level Impression Coping Transfer Non-Octa (артикул S-TICTN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.52 Трансфер Impression Coping Octa Abutment Pickup (артикул S-ICOAP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.53 Трансфер Impression Coping Octa Abutment Pickup Non-Hex (артикул S-ICOAPN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.54 Трансфер Impression Coping Octa Abutment Transfer (артикул S-ICOAT) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.55 Трансфер Impression Coping Octa Abutment Transfer Non-Hex (артикул S-ICOATN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.56 Направляющий пин трансфера Bone Level Mini Impression Coping Pickup Guide Pin Long (артикул S-BMICPGL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 3.57 Трансфер Bone Level Impression Coping Transfer Non-Hex Short (артикул S-BICTN65Sc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом и колпачком.
- 3.58 Трансфер Bone Level Mini Short Impression Coping Transfer (артикул S-BMSICT50) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.59 Трансфер Bone Level Mini Short Impression Coping Transfer (артикул S-BMSICT60) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.60 Трансфер Bone Level Mini Short Impression Pickup Transfer (артикул S-BMSICP50) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.61 Трансфер Bone Level Mini Short Impression Pickup Transfer (артикул S-BMSICP60) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.62 Трансфер Abutment Impression Coping Pick Up (артикул S-BMUAICP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 3.63 Трансфер Mono Implant Transfer (артикул MIT) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 3.64 Трансфер Mono Implant Transfer (артикул MIT-LAb) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 337 из 344

- 3.65 Направляющий пин трансфера Bone Level Mini Impression Coping Pickup Guide Pin Short (артикул S-BMICPGS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 3.66 Направляющий пин трансфера Bone Level Impression Coping Pickup Guide Pin Long (артикул S-BICPGL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.67 Направляющий пин трансфера Bone Level Impression Coping Pickup Guide Pin Short (артикул S-BICPGS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.68 Направляющий пин Bone Level Mini Impression Coping Transfer Guide Pin Long (артикул S-BMICTGL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.69 Направляющий пин Bone Level Mini Impression Coping Transfer Guide Pin Short (артикул S-BMICTGS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.70 Направляющий пин Bone Level Impression Coping Transfer Guide Pin Long (артикул S-BICTGL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.71 Направляющий пин Bone Level Impression Coping Transfer Guide Pin Short (артикул S-BICTGS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.72 Направляющий пин Tissue Level Impression Coping Pickup Guide Pin Long (артикул S-TICPGL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.73 Направляющий пин Tissue Level Impression Coping Pickup Guide Pin Short (артикул S-TICPGS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.74 Направляющий пин Tissue Level Impression Coping Transfer Guide Pin (артикул S-TICTG14) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.75 Направляющий пин Bone Level Mini Short Impression Coping Guide Pin (артикул S-BMSICTGP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.76 Направляющий пин Abutment Impression Coping Pick Up Guide Pin (артикул S-BMICPGPIN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.77 Направляющий пин Impression Coping Octa Abutment Pickup Guide Pin Long (артикул S-ICOAPG15) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 3.78 Направляющий пин Impression Coping Octa Abutment Transfer Guide Pin Short (артикул S-ICOATG10) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 3.79 Трансфер i-system Impression Post (артикул I-SIP (2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 338 из 344

- 3.80 Трансфер i-system Impression Post (артикул I-SIP (2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 3.81 Трансфер i-system Impression Post (артикул I-SIP (3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется колпачком.
- 3.82 Трансфер Implantswiss Tissue Level Wide Scanner Body (артикул S-TWSB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 3.83 Трансфер Implantswiss Tissue Level Wide Scanner Body (артикул S-TSB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 3.84 Трансфер Implantswiss Premill Scanner Body (артикул S-PSB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 3.85 Трансфер Implantswiss Premill Mini Scanner Body (артикул S-PMSB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 3.86 Трансфер Implantswiss Multi Unit Scanner Body (артикул S-PMUSB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 3.87 Трансфер Implantswiss Octa Scanner Body (артикул S-POSB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 3.88 Трансфер i-system Abutment Impression Coping Pick Up (артикул I-SMUAICP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется направляющим пином.
- 3.89 Трансфер i-system Multi Unit Abutment Plastic Clinder Non-Hex (артикул I-SMUAPICyN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.

- 4. Колпачки:

- 5.1 Колпачок для снятия слепка Bone Level Mini Solid Abutment Impression Cap (артикул S-BMSAICap37) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.2 Колпачок для снятия слепка Bone Level Solid Abutment Impression Cap (артикул S-BSAICap45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.3 Колпачок для снятия слепка Bone Level Solid Abutment Impression Cap (артикул S-BSAICap55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.4 Колпачок для снятия слепка Bone Level Solid Abutment Impression Cap (артикул S-BSAICap65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.5 Выжигаемый колпачок Bone Level Mini Solid Abutment Plastic Coping Bridge (артикул S-BMSAPIC37b) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

Инструкция по применению на медицинское изделие: «Компоненты ортопедические для дентальной имплантации: implantswiss, MONO IMPLANT, i-system, в вариантах исполнения»

Страница 339 из 344

- 5.6 Выжигаемый колпачок Bone Level Mini Solid Abutment Plastic Coping Crown (артикул S-BMSAPIC37c) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.7 Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Bridge (артикул S-BSAPIC45b) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.8 Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Bridge (артикул S-BSAPIC55b) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.9 Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Bridge (артикул S-BSAPIC65b) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.10 Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (артикул S-BSAPIC45c) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.11 Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (артикул S-BSAPIC55c) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.12 Выжигаемый колпачок Bone Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (артикул S-BSAPIC65c) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.13 Выжигаемый колпачок Tissue Level Solid Abutment Plastic Coping Crown (артикул S-TSAPICc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.14 Колпачок Oring Pink Cap (артикул S-ORG-PCap) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.15 Колпачок Oring Green Cap (артикул S-ORG-GCap) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.16 Колпачок Oring Yellow Cap (артикул S-ORG-YCap) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.17 Цилиндрический колпачок Octa Abutment Non Octa Titanium Cylinder (артикул S-OATICYN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 5.18 Цилиндрический колпачок Multi Unit Abutment Plastic Clinder Non-Hex (артикул S-MUAPICyN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 5.19 Цилиндрический колпачок Octa Abutment Titanium Clinder (артикул S-OATICY) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 5.20 Выжигаемый колпачок Mono Implant Burnout Cap (артикул MBC) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.21 Выжигаемый колпачок Mono Implant Burnout Cap (артикул MBC-LAb) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.22 Цилиндрический колпачок Tissue Octa Abutment Plastic Cylinder (артикул S-TOAPICy) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 5.23 Цилиндрический колпачок Tissue Octa Abutment Plastic Cylinder Non-Octa (артикул S-TOAPICyN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.

- 5.24 Цилиндрический колпачок Octa Abutment Plastic Cylinder (артикул S-OAPICy) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 5.25 Цилиндрический колпачок Octa Abutment Plastic Cylinder Non-Octa (артикул S-OAPICyN) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
- 5.26 Колпачок Locator Impression Cap (артикул S-LICAP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.27 Колпачок Excellent Ball Impression Cap (артикул S-EBICAP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.28 Колпачок Implantswiss Bone Level Mini Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 4.5 mm, Length - 6.1 mm NON STERILE (артикул S-BMSAHCap37) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.29 Колпачок Implantswiss Bone Level Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 5.1 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BSAHCap45) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.30 Колпачок Implantswiss Bone Level Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 5.8 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BSAHCap55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.31 Колпачок Implantswiss Bone Level Solid Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 6.8 mm Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BSAHCap65) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.32 Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-TSACap40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.33 Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 8 mm NON STERILE (артикул S-TSACap55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.34 Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 9.5 mm NON STERILE (артикул S-TSACap70) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.35 Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large Cap, Dimensions: Diameter - 5.4 mm, Length - 6.45 mm NON STERILE (артикул S-TSALCap40) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.36 Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large Cap, Dimensions: Diameter - 5.4 mm, Length - 7.85 mm NON STERILE (артикул S-TSALCap55) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.37 Колпачок Implantswiss Tissue Level Solid Abutment Large Cap, Dimensions: Diameter - 5.4 mm, Length - 9.35 mm NON STERILE (артикул S-TSALCap70) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.38 Колпачок Implantswiss Octa Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-OAHCap) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.

- 5.39 Колпачок Implantswiss Multu Unit Abutment Healing Cap, Dimensions: Diameter - 4.9 mm, Length - 4mm NON STERILE (артикул S-MUAHCap) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется винтом.
 - 5.40 Колпачок Implantswiss O-Ring (red) Dimensions: Length - 1.42 mm, Diameter - 4.32 mm NON STERILE (артикул S-O-RING-R) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 5.41 Колпачок Implantswiss O-Ring (black) Dimensions: Length - 1.42 mm, Diameter - 4.32 mm NON STERILE (артикул S-O-RING-B) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 5.42 Колпачок Implantswiss O-Ring Retainer, Dimensions: Diameter - 5.15 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-ORR) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется 2 дополнительными колпачками.
 - 5.43 Колпачок Implantswiss O-Ring Retainer Open, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 2.0 mm NON STERILE (артикул S-ORRo) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется 3 дополнительными колпачками.
 - 5.44 Колпачок Implantswiss O-Ring Retainer Closed, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-ORRc) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется 2 дополнительными колпачками.
 - 5.45 Колпачок Implantswiss Superb Overdenture Cap, Dimensions: Diameter - 5.5 mm, Length - 3.5 mm NON STERILE (артикул S-EBOCap) – 5 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется 2 дополнительными колпачками.
 - 5.46 Колпачок Implantswiss Matrix Housing, Dimensions: Diameter - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-LMHt) – 2 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению, комплектуется 2 дополнительными колпачками.
 - 5.47 Колпачок Implantswiss Matrix Housing, Dimensions: , Diameter - 5.5 mm NON STERILE (артикул S-LMHp) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 5.48 Колпачок Implantswiss Retention Insert Yellow, Dimensions: Diameter - 4.86 mm NON STERILE (артикул S-LRI-y) – 4 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 5.49 Колпачок Implantswiss Retention Insert Blue, Dimensions: Diameter - 4.86 mm NON STERILE (артикул S-LRI-b) – 4 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 5.50 Колпачок Implantswiss Retention Insert White, Dimensions: Diameter - 4.86 mm NON STERILE (артикул S-LRI-w) – 4 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 5.51 Колпачок Implantswiss Retention Insert, Dimensions: Diameter - 4.86 mm, Material: PEEK./Ti NON STERILE (артикул S-LRI) – 4 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
5. Балки

- 5.1 Балка Bar Positioning (артикул S-IBP) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.2 Балка Bar Housing (артикул S-IBH) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.3 Балка Bar Clip Yellow (артикул S-IBClip-y) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.4 Балка Bar Clip Pink (артикул S-IBClip-p) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.5 Балка Bar Clip Red (артикул S-IBClip-r) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 5.6 Балка Bar Burnout (артикул S-IB) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 6. Винты
 - 6.1 Винт I-System Fixture Cover Plug, Dimensions: Diameter - 5.0 mm, Length - 6.0 mm NON STERILE (артикул I-SCL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.2 Винт I-System Implant Driver, NON STERILE (I-SFD(2)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.3 Винт I-System Implant Driver, NON STERILE (I-SFD(2.5)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.4 Винт I-System Implant Driver, NON STERILE (I-SFD(3)) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.5 Винт Implantswiss Bone Level Mini Closing Screw, Dimensions: Diameter - 2.8 mm, Length - 4.5 mm NON STERILE (артикул S-BMCLS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.6 Винт Implantswiss Bone Level Closing Screw, Dimensions: Diameter - 3.36 mm, Length - 6.5 mm NON STERILE (артикул S-BCLS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.7 Винт Implantswiss Bone Level Mini Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 2.1 mm, Length - 7.65 mm NON STERILE (артикул S-BMAS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.8 Винт Implantswiss Bone Level Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 2.3 mm, Length - 9.5 mm NON STERILE (артикул S-BAS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.9 Винт Implantswiss Bone Level Multi Unit Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 1.96 mm, Length - 9.0 mm NON STERILE (артикул S-BMUAS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
 - 6.10 Винт Implantswiss Tissue Level Closing Screw Large, Dimensions: Diameter - 5.2 mm, Gingival Height - 6.4 mm NON STERILE (артикул S-TCLSL) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.

- 6.11 Винт Implantswiss Tissue Level Closing Screw Small, Dimensions: Diameter - 3.5.0 mm, Gingival Height - 5.35 mm NON STERILE (артикул S-TCLSS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 6.12 Винт Implantswiss Tissue Level Closing Screw Wide, Dimensions: Diameter - 6.4 mm, Gingival Height - 6.4 mm NON STERILE (артикул S-TCLSW) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 6.13 Винт Implantswiss Tissue Level Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 2.5 mm, Length - 7.1 mm NON STERILE (артикул S-TAS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 6.14 Винт Implantswiss Octa Abutment Screw, Dimensions: Diameter - 2.5 mm, Length - 4.5 mm NON STERILE (артикул S-OAS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.
- 6.15 Винт Implantswiss Multi Unit Abutment Healing Screw, Dimensions: Diameter - 2.2 mm, Length - 4.0 mm NON STERILE (артикул S-MUAHS) – 1 шт./индивидуальная упаковка с инструкцией по применению.



**NOVODENT
(НОВОДЕНТ)**

«Мной засвидетельствовано»

«9» февраля 2022 г.

/подпись/

Генеральный директор Бернар Ярманн (Bernard Jahrmann)
Novodent SA, Switzerland (Новодент СА, Швейцария)



**NOVODENT
(НОВОДЕНТ)**

Y-Parc Technopole
Av. des Sciences 11
1400 Yverdon-les-Bains
(И-ПАРК Технопол
Авеню де Сьянс 11 1400
г. Йвердон-ле-Бен)
Тел: +41 (0)24 524 28 28
Швейцария

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Компоненты ортопедические для дентальной имплантации:
IMPLANTSWISS, MONO IMPLANT, I-SYSTEM, в вариантах
исполнения»**

2022

NOVODENT SA (НОВОДЕНТ СА)

Y-PARC Technopole, Avenue des Sciences 11 CH-1400 Yverdon -les Bains
Switzerland (И-ПАРК Технопол Авеню де Сьянс CH-11 1400 г. Йвердон-ле-Бен,
Швейцария)

Номер свидетельства о легализации: 5'244. -----

Сравнив подписи, Я, АЛЕКСИС де СЕЛЛЬЕ (ALEXIS de SELLERS), нотариус г. Лозанна (округ Во - Швейцария) округа Во, настоящим удостоверяю подлинность подписи на данном документе, поставленной Бернаром Робертом ЯРМАННОМ (Bernard Robert JAHRMANN), проживающим в г. Ренан (округ Во - Швейцария) и имеющим полномочия от имени компании Novodent SA (Новодент СА) в г. Ивердон-ле-Бен (округ Во - Швейцария) подписывать юридические документы. -
г. Лозанна, 10 февраля 2022 г. -----

Печать:

A. de SELLERS (А. де СЕЛЛЬЕ)

НОТАРИУС

ОКРУГА ВО

/СВОБОДА И РОДИНА/

/подпись/

Печать:

A. de SELLERS

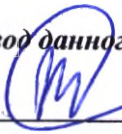
(А. де СЕЛЛЬЕ)

НОТАРИУС

ОКРУГА ВО

/СВОБОДА И

РОДИНА/


Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Семнадцатого февраля две тысячи двадцать второго года.

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика, Котлярова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2022- *11-467*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью *348* лист(а)(ов)

Нотариус

В. К. Корсик

