

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЗАВОД НЕАВТОКЛАВНЫХ ПОРИСТЫХ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ"
(ООО "Завод НПБК")**

ОКПД2 32.50.50.190

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Завод НПБК»

Фролов Евгений Владимирович

« 24 » 2021г.



**Маска медицинская одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-001-43900530-2021**

Инструкция по применению

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Завод НПБК»

с. Кинель-Черкассы

2021

Содержание

1. Введение	3
2. Технические характеристики.....	5
2.1 Общие требования	5
2.3 Требования к сырью и изготовлению	6
3. Комплектность	9
4. Маркировка	9
5. Упаковка	10
6. Требования безопасности	10
7. Транспортирование и хранение.....	10
8. Инструкция по применению.....	10
9. Сведения об утилизации	12
10. Гарантии изготовителя	13
11. Контактная информация:	13

1. Введение

Настоящая инструкция по применению (далее по тексту – инструкция) распространяется на медицинское изделие маску медицинскую одноразовую нестерильную (далее по тексту – маска медицинская), предназначенную для создания фильтрующего барьера для предотвращения попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, изготовленную по ТУ 32.50.50-001-43900530-2021 (далее – маска, маски, изделие и т.д.).

Область применения – эпидемиология.

Варианты исполнения:

Вариант исполнения 1. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 1.1», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 2. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 1.2», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 3. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 1.3», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 4. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 1.4», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 5. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 2.1», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 6. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 2.1», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 7. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 2.1», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Вариант исполнения 8. Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 2.1», цвет: белый, голубой, розовый, черный - по 1 шт./уп., 3 шт./уп., 5 шт./уп., 10 шт./уп., 20 шт./уп., 50 шт./уп., 100 шт./уп.

Информация о потенциальных пользователях: медицинский персонал и пациенты в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, а также лица, по роду деятельности имеющими высокий риск заболевания в эпидемический период или заражения им других лиц, в общественных и торговых организациях, в транспорте.

Показания к применению: профилактика распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов маски, истекший срок годности изделия, нарушение целостности упаковки изделия.

Побочные эффекты: Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия: одноразовый, не подлежащий ремонту продукт.

Классификация медицинского изделия:

Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) – 32.50.50.190 (Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки).

Вид в номенклатурной классификации медицинских изделий по видам – 367580 (Маска лицевая для защиты дыхательных путей одноразового использования).

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 1 (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

Изделие соответствует виду климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Примеры условного обозначения при заказе и в других документах:

«Маска медицинская одноразовая нестерильная «модель 2.1», цвет: голубой - по 3 шт./уп.».

Маска относится к типу II согласно ГОСТ Р 58396-2019.

2. Технические характеристики

2.1 Общие требования

Маска должна соответствовать требованиям настоящих Технических условий, ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний», технической спецификации и должна быть произведена в соответствии с регламентом на производство Предприятия.

Маска медицинская является нестерильным одноразовым медицинским изделием и представляет собой прямоугольную салфетку, изготовленную из нетканых материалов, с вшитым носовым фиксатором, снабженную ушными петлями (эластичными шнурами).

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

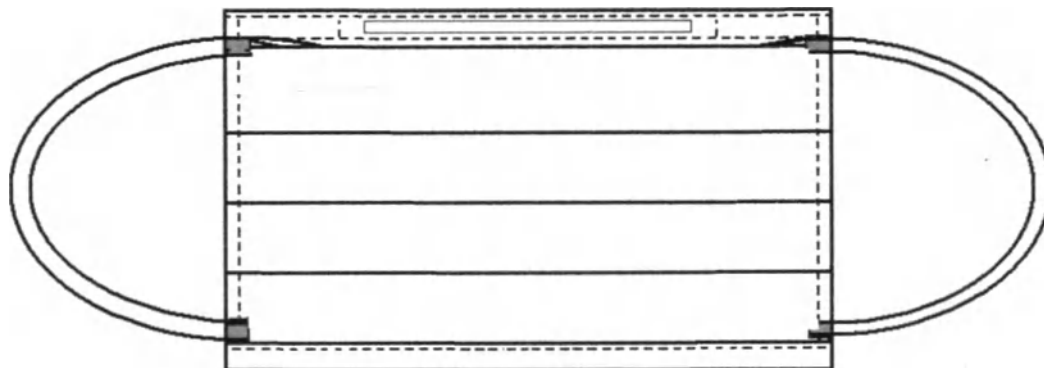


Рисунок 1 – Общий вид маски.

2.2 Основные параметры и размеры

2.2.1 Изделие состоит из 3 слоев, материал, используемый в слоях, для всех вариантов исполнения прописан в таблице 3.

2.2.2 Основные технические характеристики медицинского изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значения параметров
1. Масса изделия, г	
- Маска «модель 1,1», «модель 1,2», «модель 1,3», «модель 1,4»	$3,0 \pm 1,5$
- Маска «модель 2,1», «модель 2,2», «модель 2,3», «модель 2,4»	$2,5 \pm 1,5$
- носового фиксатора	$0,13 \pm 0,05$
2. Поверхностная плотность, г/м ²	
- Маска «модель 1,1» и «модель 2,1»,	$75,0 \pm 15,0$
- Маска «модель 1,2» и «модель 2,2»,	$65,0 \pm 15,0$
- Маска «модель 1,3» и «модель 2,3»,	$60,0 \pm 15,0$
- Маска «модель 1,4» и «модель 2,4»,	$55,0 \pm 15,0$
3. Разрывная нагрузка основы в продольном направлении, Н:	
- в сухом состоянии	не менее 49
- во влажном состоянии	не менее 44

2.2.3 Эффективность бактериальной фильтрации должна быть не менее 99 %.

2.2.4 Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) должно быть не более 29,4 Па/см².

2.2.5 Форма и конструкция маски должны обеспечивать необходимую защиту, динамическое соответствие анатомическим особенностям носоротовой области лица и не причиняют дискомфорта при эксплуатации.

2.2.6 Маска медицинская имеет три складки, глубиной от 1 до 1,5 см.

2.2.7 В верхней части маски должен располагаться вшитый носовой зажим (фиксатор) для улучшения прилегания маски в области переносицы за счет повторения формы носа.

2.2.8 Маска должна иметь средства фиксации – ушные петли (эластичный шнур), которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу по бокам, облекая нос, рот и подбородок пользователя.

2.2.9 Элементы маски должны быть скреплены машинным соединением посредством ультразвуковой сварки.

2.2.10 Маска не должна расслаиваться, распадаться или разрываться во время использования.

2.2.11 По физико-механическим, санитарно-химическим и токсикологическим показателям маски должны соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Значение показателя pH, ед. pH	$(6,00 - 9,00) \pm 1,00$
Ультрафиолетовое поглощение, ед. ОП, не более	0,300
Восстановительные примеси, дм^3 , не более	1,00
Содержание формальдегида, мг/дм^3 , не более	0,100
Содержание ацетальдегида, мг/дм^3 , не более	0,200
Содержание ацетона, мг/дм^3 , не более	0,100
Содержание метанола, мг/дм^3 , не более	0,200
Содержание изопропанола, мг/дм^3 , не более	0,100
Эффективность бактериальной фильтрации*, %	≥ 99
Воздухопроницаемость (дифференциальное давление), Па/см^2 *	$< 29,4$
Микробиологическая чистота, КОЕ/г	≤ 30
Раздражающее действие, баллы	0

*Показатель обязателен для контроля с 01.01.2021 г. в соответствии с ГОСТ Р 58396-2019.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2.3 Требования к сырью и изготовлению

2.3.1 Сырье и материалы

2.3.1.1 Для изготовления продукции должны использоваться материалы, соответствующие требованиям нормативных и/или технических документов, утвержденных в установленном порядке.

2.3.1.2 Все материалы, используемые при изготовлении изделия должны быть экологически чистыми и не оказывать вредного воздействия на людей и окружающую среду в условиях эксплуатации.

2.3.1.3 Материалы должны иметь сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие их качество и безопасность.

2.3.1.4 Материалы, используемые при изготовлении продукции, и требования к ним представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Название материала	Поверхностная плотность	Производитель	Назначение в составе изделия	Исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый)	25±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с лицом)	Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.1» Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.1»
2.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый, голубой, розовый, черный)	25±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с внешней средой)	
3.	Полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) (цвет: белый)	25±5 г/м ²	ООО «Завод Эластик», Россия	Внутренний слой маски	
4.	Нетканый материал Мельтблаун (100% полипропилен) (цвет: белый)	25±5 г/м ²	ООО НПП «Волга Медикал»		
5.	Резинка 2,7 мм (70% нейлон, 30% спандекс)	-	ООО «Завод НПБК»	Фиксирующий элемент маски (резинка)	
6.	Пластик с жилами из алюминия нелегированного	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай	Носовой фиксатор	
7.	Пластик	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай		
1.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый)	20±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с лицом)	Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.2» Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.2»
2.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый, голубой, розовый, черный)	20±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с внешней средой)	
3.	Полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) (цвет: белый)	25±5 г/м ²	ООО «Завод Эластик», Россия	Внутренний слой маски	
4.	Нетканый материал Мельтблаун (100% полипропилен) (цвет: белый)	25±5 г/м ²	ООО НПП «Волга Медикал»		
5.	Резинка 2,7 мм (70% нейлон, 30% спандекс)	-	ООО «Завод НПБК»	Фиксирующий элемент маски (резинка)	
6.	Пластик с жилами из алюминия нелегированного	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай	Носовой фиксатор	
7.	Пластик	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай		
1.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый)	20±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с лицом)	Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.3» Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.3»
2.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый, голубой, розовый, черный)	20±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с внешней средой)	
3.	Полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) (цвет: белый)	20±5 г/м ²	ООО «Завод Эластик», Россия	Внутренний слой маски	
4.	Нетканый материал Мельтблаун (100% полипропилен) (цвет: белый)	20±5 г/м ²	ООО НПП «Волга Медикал»		
5.	Резинка 2,7 мм (70% нейлон, 30% спандекс)	-	ООО «Завод НПБК»	Фиксирующий элемент маски (резинка)	
6.	Пластик с жилами из алюминия нелегированного	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай	Носовой фиксатор	
7.	Пластик	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай		

1.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый)	15±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с лицом)	Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.4»
2.	Полимерное нетканое полотно Спанбонд (100% полипропилен) (цвет: белый, голубой, розовый, черный)	20±5 г/м ²	ООО "Торговый дом Ван-Маркет", Россия	Внешний слой маски (контактирующий с внешней средой)	
3.	Полимерное нетканое полотно СМС (100% полипропилен) (цвет: белый)	20±5 г/м ²	ООО «Завод "Эластик", Россия	Внутренний слой маски	Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.4»
4.	Нетканый материал Мельблэун (100% полипропилен) (цвет: белый)	20±5 г/м ²	ООО ИПП «Волга Медикал»		
5.	Резинка 2,7 мм (70% нейлон, 30% спандекс)	-	ООО «Завод НГБК»	Фиксирующий элемент маски (резинка)	
6.	Пластик с жилами из алюминия пелегированного	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай	Носовой фиксатор	
7.	Пластик	-	ZHUCHENG HENGDE MACHINERY CO., LTD, Китай		

2.4 Размеры масок:

Маска медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-001-43900530-2021 изготавливается в различных размерах в зависимости от варианта исполнения (см. таблицу 4)

Таблица 4

Исполнение	Длина маски, см	Ширина маски в готовом виде, см	Ширина маски в расправленном виде, см	Длина носового фиксатора, см	Ширина носового фиксатора, см	Толщина носового фиксатора, мм	Длина фиксирующей резинки, см
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.1»	17,5±1,0	9,5±1,0	16,0±2,0	10,0±1,5	0,2-0,4	0,5-1,0	15,0±2,0
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.2»	17,5±1,0	9,5±1,0	16,0±2,0	10,0±1,5	0,2-0,4	0,5-1,0	15,0±2,0
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.3»	17,5±1,0	9,5±1,0	16,0±2,0	10,0±1,5	0,2-0,4	0,5-1,0	15,0±2,0
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 1.4»	17,5±1,0	9,5±1,0	16,0±2,0	10,0±1,5	0,2-0,4	0,5-1,0	15,0±2,0
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.1»	14,0±1,0	8,0±1,0	16,0±2,0	5,0±1,0	0,2-0,4	0,5-1,0	9,0±1,5
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.2»	14,0±1,0	8,0±1,0	16,0±2,0	5,0±1,0	0,2-0,4	0,5-1,0	9,0±1,5
Маска медицинская	14,0±1,0	8,0±1,0	16,0±2,0	5,0±1,0	0,2-0,4	0,5-1,0	9,0±1,5

одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.3»							
Маска медицинская одноразовая нестерильная «МОДЕЛЬ 2.4»	14,0±1,0	8,0±1,0	16,0±2,0	5,0±1,0	0,2-0,4	0,5-1,0	9,0±1,5

3. Комплектность

Маски одного варианта исполнения в потребительской упаковке по 1 шт., 3 шт., по 5 шт., 10 шт., 20 шт., 50 шт., 100 шт.

Инструкция по применению (вкладыш).

Инструкция по применению – 1 экз.

4. Маркировка

4.1 Маркировка масок медицинских должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний». Маска может быть маркирована символами по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

4.2 Маркировка может быть представлена на русском языке.

На каждой потребительской упаковке должно быть указано:

- наименование предприятия-производителя, его товарный знак и адрес производства;
- организация для принятия претензий от потребителей, адрес, телефон/факс, сайт;
- наименование изделия;
- количество в упаковке;
- назначение, область применения;
- состав;
- показания к применению;
- противопоказания к применению;
- побочные эффекты;
- рекомендации по использованию;
- условия хранения и транспортирования;
- срок годности;
- условия утилизации;
- дата изготовления;
- номер партии;
- номер технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- надпись: «Изделие нестерильно, не подлежит стерилизации перед использованием»;
- надпись: «Изделие одноразового применения, не подлежит повторному использованию»;
- надпись: «Нетоксично»;
- тип маски согласно требованиям ГОСТ Р 58396-2019;
- цвет

Дополнительные символы и знаки: «Диапазон температур хранения», «Бережь от влаги», «Бережь от прямых солнечных лучей», «Ознакомиться с инструкцией», «Не пищевой продукт», «Разрешена утилизация с бытовыми отходами». Допускается нанесение знаков добровольной и/или международной сертификации, наименования и/или логотипа заказчика.

4.2.1 На транспортной упаковке должно быть указано:

- наименование предприятия-производителя, его товарный знак;
- адрес производства, телефон/факс, сайт;
- наименование изделия;
- количество в упаковке;

- д) условия хранения и транспортирования;
- е) срок годности;
- ж) условия утилизации;
- з) дата изготовления;
- и) номер партии;
- к) номер технических условий;
- л) номер регистрационного удостоверения;
- м) тип маски согласно требованиям ГОСТ Р 58396-2019;
- н) манипуляционные знаки, соответствующие изображениям «Беречь от влаги», «Беречь от прямых солнечных лучей», «Диапазон температур хранения». Допускается нанесение знаков добровольной и/или международной сертификации, наименования и/или логотипа заказчика.

5. Упаковка

- 5.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от механических и климатических факторов при транспортировке и хранении.
- 5.2 Маски упаковывают в потребительскую упаковку (из полиэтиленовой пленки марки Н по ГОСТ 10354, либо из полимерной пленки) по 1 шт., 3 шт., по 5 шт., 10 шт., 20 шт., 50 шт., 100 шт.
- 5.3 Упакованные маски укладываются в транспортную упаковку - ящик из гофрированного картона. Количество масок в транспортной упаковке – 1000, 2000 или 2500, 3000, 3600 штук масок.
- 5.4 Эксплуатационные документы (инструкция по применению) прилагаются к упаковке.

6. Требования безопасности

- 6.1 Продукция должна соответствовать требованиям санитарно-гигиенической токсикологической безопасности по ГОСТ Р 52770 и биологической безопасности по ГОСТ ИСО 10993-1.

7. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия может осуществляться всеми видами закрытых транспортных средств, при условии их защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения упаковки и увлажнения изделий при транспортировке, погрузке и разгрузке продуктов.

Маска при транспортировании должна быть устойчива к механическим воздействиям по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Маска при транспортировании должна быть устойчива к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

Хранить при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Маска при хранении должна быть устойчива к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150 для условий хранения 1(Л).

8. Инструкция по применению

- 8.1. Тщательно вымыть руки.
- 8.2. Вскрыть упаковку, вынуть маски из упаковки.
- 8.3. Маску необходимо надеть таким образом, чтобы внешняя складка, располагающаяся посередине маски, оказалась снаружи (Рис.2).



Рис. 2

8.4. Приложите маску к лицу (Рис. 3).



Рис. 3

8.5. Закрепите за уши резиновые петли (Рис. 4).



Рис. 4

8.6. По контуру носа согните носовой фиксатор (Рис. 5).



Рис. 5

8.7. Расправить для удобства, чтобы маска плотно закрывала рот и нос.

8.8. Маски рекомендованы для одноразового применения в течение нескольких часов (2-3 часа).

8.9. Заменять маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы, а также если маска стала мокрой, дыхание затрудненным.

8.10. Не используйте повторно одноразовую маску!

8.11. Использованные маски подлежат удалению как отходы класса Б (для противодействия распространению инфекционных заболеваний).



8.12. Не допускается применять маску, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность маски, в том числе поврежденные (надорванные ушные петли).

8.13. Не допускается применять маску при работах с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом маски.

8.14. Маска не является защитным средством от газов (кислых, органических и неорганических), паров ртути и других сильных химических веществ.

8.15. Не рекомендуется применение масок в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.

8.16. Не применяйте маски в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов масок.

9. Сведения об утилизации

9.1. Использованные по назначению маски утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

9.2. Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

9.3. Утилизация использованных масок физическими лицами осуществляется в контейнеры для твердых коммунальных отходов, предварительно герметизировав в отдельном пакете (либо первичной упаковке).

9.4 Утилизация использованных масок в организациях:

Использованные маски собираются в одноразовую мягкую упаковку (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку.

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4, сотрудник ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание.

Маски в закрытых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в место временного хранения медицинских отходов запрещается.

10. Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие масок медицинским требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

10.2 Гарантийный срок хранения масок медицинских – 5 лет с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

11. Контактная информация:

Производитель:

ООО «Завод НПБК»

ИНН 6372022911 / ОГРН 1156313033040

Адрес юридический: 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с Кинель-Черкассy,
Кинельская ул., д. 35

Адрес места производства: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 37,
пом. 5

Тел: +7 (939) 707-70-30

Эл. почта: maska@znpbk.ru

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошито, прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов

От лица ООО « Завод НПБК »

Генеральный директор

Фролов Е.В.



✓