



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин
« 03 » декабря 2021 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия и его компонентов

**«Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу
гепатита С (HCV) и подтверждения результатов скрининга**

«антиHCV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»»

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	К-во в серии	Дата нм (год-мес)	Годен до (год-мес)
K110C.24	«антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»	002/2	100	2020-11	2022-11
Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (НСУ) и подтверждения результатов скрининга «антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»					
Условия хранения и транспортировки: +2-8°C			ТУ № 21.20.23-1102-18619450-2021		
Набор соответствует требованиям			ТУ № 21.20.23-1102-18619450-2021		
Упаковка соответствует требованиям			ТУ № 21.20.23-1102-18619450-2021		



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (НСУ)
и подтверждения результатов скрининга
«антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ REF K110C.24

ТУ 21.20.23-1102-18619450-2021

РУ №



For 24 determinations / На 24 определений



Для ИФА-диагностики



ХЕМА Со. Лтд.
The 8th Parkovaya str., 48
105264 Moscow, Russia
Tel./fax: +7(495) 510-57-07
e-mail: info@xema-medica.com
www.xema-medica.com



Authorized Representative in EU:
Polmed.de
Steinacker 20, D-73773
Aichwald, Germany
e-mail: info@polmed.de



Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (НСУ) и подтверждения результатов скрининга «антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

REF K110C.24 Серия 002/2

Годен до 2022-11

Комплектация для 24 определений



ТУ 21.20.23-1102-18619450-2021

РУ

от

«Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген вируса гепатита В (HBsAg) отсутствуют.
Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.
Для профессионального применения.

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубопровод, д.28
Телефон: +7(495) 510-57-07, факс: +7(495) 510-57-07

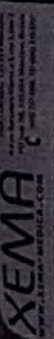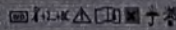

«антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF K110C.24

LOT 002/2 Σ24

Годен до 2022-11

Состав набора:

	емкость	CONT	серия	LOT
Платки	1 шт	FORB MTR	P1102Z	002/2
Оптический контрольный сыворотка	1 x 3.0 ml	CONTROL	CM1102Z	002/2
Положительная контрольная сыворотка	1 x 2.0 ml	CONTROL	CP1102Z	002/2
Концентрат мыльной	1 x 1.1 ml	COUJ 11A	T1102Z	002/2
Буфер для разведения концентрата мыльной	1 x 14 ml	DE COU	ST1102Z	002/2
Буфер для разведения образцов	1 x 14 ml	DE	S011Z	002/2
Системный раствор				
тетраметилбензол (ТМБ)	1 x 14 ml	SUBS TMB	R055Z	002/2
Концентрат оптического раствора	1 x 50 ml	BUF WASH 20X	S008Z	002/2
Средства	1 x 14 ml	STOP	R0402Z	002/2
Буфер для закаливания планшетов	2 шт		N003	
Инструкция по применению	1 шт		K110C.24	
Паспорт контроля качества	1 шт		K110C.24	

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубопровод, д.28
Телефон: +7(495) 510-57-07, факс: +7(495) 510-57-07



ООО «ХЕМА»
ПАСПОРТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
XEMA CO. LTD.
QUALITY CONTROL SHEET

Общество с ограниченной ответственностью «ХЕМА»
Паспорт контроля качества № 110C.24/0022

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	В-во в серии	Дата изг. (гггг-мм-сс)	Годов. экз. (гггг-мм-сс)
K110C.24	«антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»	0022	100	2022-11	2023-11

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (НСУ) и подтверждения результатов скрининга «антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

Условия хранения и транспортировки: +2-8°C

Набор соответствует требованиям

Упаковка соответствует требованиям

ТУ № 21.20.23-100-000000-001
ТУ № 21.20.23-100-100000-001



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (НСУ) и подтверждения результатов скрининга «антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ REF K110C.24

ТУ 21.20.23-100-000000-001

ТУ 21.20.23-100-100000-001



XEMA
www.xema-medica.com

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (НСУ) и подтверждения результатов скрининга «антиНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

REF K110C.24 Серия 0022

Годен до 2023-11

Комплектация для 24 определений

ТУ 21.20.23-100-100000-001

07

Адрес: г. Москва, ул. Битовская, д. 10, стр. 1, этаж 1-й, пом. 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116, 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182, 183-184, 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326, 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 349-350, 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360, 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396, 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430, 431-432, 433-434, 435-436, 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456, 457-458, 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476, 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486, 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526, 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536, 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546, 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586, 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676, 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706, 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716, 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750, 751-752, 753-754, 755-756, 757-758, 759-760, 761-762, 763-764, 765-766, 767-768, 769-770, 771-772, 773-774, 775-776, 777-778, 779-780, 781-782, 783-784, 785-786, 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796, 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806, 807-808, 809-810, 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832, 833-834, 835-836, 837-838, 839-840, 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856, 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866, 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878, 879-880, 881-882, 883-884, 885-886, 887-888, 889-890, 891-892, 893-894, 895-896, 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906, 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916, 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926, 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936, 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 945-946, 947-948, 949-950, 951-952, 953-954, 955-956, 957-958, 959-960, 961-962, 963-964, 965-966, 967-968, 969-970, 971-972, 973-974, 975-976, 977-978, 979-980, 981-982, 983-984, 985-986, 987-988, 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010, 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028, 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078, 1079-1080, 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088, 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098, 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146, 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156, 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, 1217-1218, 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226, 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236, 1237-1238, 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246, 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256, 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276, 1277-1278, 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288, 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296, 1297-1298, 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310, 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316, 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326, 1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338, 1339-1340, 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346, 1347-1348, 1349-1350, 1351-1352, 1353-1354, 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366, 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376, 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398, 1399-1400, 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406, 1407-1408, 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416, 1417-1418, 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426, 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436, 1437-1438, 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446, 1447-1448, 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456, 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478, 1479-1480, 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488, 1489-1490, 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500, 1501-1502, 1503-1504, 1505-1506, 1507-1508, 1509-1510, 1511-1512, 1513-1514, 1515-1516, 1517-1518, 1519-1520, 1521-1522, 1523-1524, 1525-1526, 1527-1528, 1529-1530, 1531-1532, 1533-1534, 1535-1536, 1537-1538, 1539-1540, 1541-1542, 1543-1544, 1545-1546, 1547-1548, 1549-1550, 1551-1552, 1553-1554, 1555-1556, 1557-1558, 1559-1560, 1561-1562, 1563-1564, 1565-1566, 1567-1568, 1569-1570, 1571-1572, 1573-1574, 1575-1576, 1577-1578, 1579-1580, 1581-1582, 1583-1584, 1585-1586, 1587-1588, 1589-1590, 1591-1592, 1593-1594, 1595-1596, 1597-1598, 1599-1600, 1601-1602, 1603-1604, 1605-1606, 1607-1608, 1609-1610, 1611-1612, 1613-1614, 1615-1616, 1617-1618, 1619-1620, 1621-1622, 1623-1624, 1625-1626, 1627-1628, 1629-1630, 1631-1632, 1633-1634, 1635-1636, 1637-1638, 1639-1640, 1641-1642, 1643-1644, 1645-1646, 1647-1648, 1649-1650, 1651-1652, 1653-1654, 1655-1656, 1657-1658, 1659-1660, 1661-1662, 1663-1664, 1665-1666, 1667-1668, 1669-1670, 1671-1672, 1673-1674, 1675-1676, 1677-1678, 1679-1680, 1681-1682, 1683-1684, 1685-1686, 1687-1688, 1689-1690, 1691-1692, 1693-1694, 1695-1696, 1697-1698, 1699-1700, 1701-1702, 1703-1704, 1705-1706, 1707-1708, 1709-1710, 1711-1712, 1713-1714, 1715-1716, 1717-1718, 1719-1720, 1721-1722, 1723-1724, 1725-1726, 1727-1728, 1729-1730, 1731-1732, 1733-1734, 1735-1736, 1737-1738, 1739-1740, 1741-1742, 1743-1744, 1745-1746, 1747-1748, 1749-1750, 1751-1752, 1753-1754, 1755-1756, 1757-1758, 1759-1760, 1761-1762, 1763-1764, 1765-1766, 1767-1768, 1769-1770, 1771-1772, 1773-1774, 1775-1776, 1777-1778, 1779-1780, 1781-1782, 1783-1784, 1785-1786, 1787-1788, 1789-1790, 1791-1792, 1793-1794, 1795-1796, 1797-1798, 1799-1800, 1801-1802, 1803-1804, 1805-1806, 1807-1808, 1809-1810, 1811-1812, 1813-1814, 1815-1816, 1817-1818, 1819-1820, 1821-1822, 1823-1824, 1825-1826, 1827-1828, 1829-1830, 1831-1832, 1833-1834, 1835-1836, 1837-1838, 1839-1840, 1841-1842, 1843-1844, 1845-1846, 1847-1848, 1849-1850, 1851-1852, 1853-1854, 1855-1856, 1857-1858, 1859-1860, 1861-1862, 1863-1864, 1865-1866, 1867-1868, 1869-1870, 1871-1872, 1873-1874, 1875-1876, 1877-1878, 1879-1880, 1881-1882, 1883-1884, 1885-1886, 1887-1888, 1889-1890, 1891-1892, 1893-1894, 1895-1896, 1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, 1903-1904, 1905-1906, 1907-1908, 1909-1910, 1911-1912, 1913-1914, 1915-1916, 1917-1918, 1919-1920, 1921-1922, 1923-1924, 1925-1926, 1927-1928, 1929-1930, 1931-1932, 1933-1934, 1935-1936, 1937-1938, 1939-1940, 1941-1942, 1943-1944, 1945-1946, 1947-1948, 1949-1950, 1951-1952, 1953-1954, 1955-1956, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290



ХЕМА
WWW.XEMA-MEDICA.COM

ООО «ХЕМА» 125319 Москва,
4-й ул. Восточного Марша, д.1, стр.3, пом.2
PO Box 58, 105264 Moscow, Russia
(495) 717-3936, 717-0040, 510-5707

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF K110C.24

LOT 002/2 Σ 24

Годен до 2022-11


Состав набора:

	символ	CONT	серия	LOT
Планшет	SORB MTP	1 шт	P1102Z	002/2
Отрицательная контрольная сыворотка	CONTROL -	1 x 3,0 мл	CN1102Z	002/2
Положительная контрольная сыворотка	CONTROL +	1 x 2,0 мл	CP1102Z	002/2
Концентрат конъюгата	CONJ 11X	1 x 1,1 мл	T1102XZ	002/2
Буфер для разведения концентрата конъюгата	DIL CONJ	1 x 14 мл	ST1102Z	002/2
Буфер для разведения образцов	DIL	1 x 14 мл	S011Z	002/2
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	SUBS TMB	1 x 14 мл	R055Z	002/2
Концентрат отмывочного раствора	BUF WASH 26X	1 x 50 мл	S008Z	002/2
Стоп-реагент	STOP	1 x 14 мл	R0502Z	002/2
Бумага для заключения планшета		2 шт	N003	
Инструкция по применению		1 шт	K110C.24I	
Паспорт контроля качества		1 шт	K110C.24Q	



K110C.24002/2112022

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубетцкая, д.28
Trubetskaya st., 28, Balashikha, Moscow reg., 143900, Russia

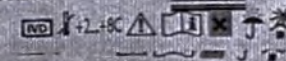

ХЕМА
WWW.XEMA-MEDICA.COM

ООО «ХЕМА» 125319 Москва,
4-й ул. Восточного Марша, д.1, стр.3, пом.2
PO Box 58, 105264 Moscow, Russia
(495) 717-3936, 717-0040, 510-5707

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM
антител к вирусу гепатита С (НСV) и подтверждения результатов
скрининга «антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

REF K110C.24 Серия 002/2

Годен до 2022-11

Комплектация для 24 определений

ТУ 21.20.23-1102-18619450-2021


РУ _____ от _____

«Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген вируса гепатита В (HBsAg), отсутствуют».

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.


Для профессионального применения.


143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубетцкая, д.28
Trubetskaya st., 28, Balashikha, Moscow reg., 143900, Russia

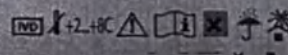



000 «ХЕМА»
«АНТИНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-
24-ИФА» REF P1102Z
ПЛАНШЕТ SORB MTP
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2022-11 LOT 0022
4 +2-8°C 1/0



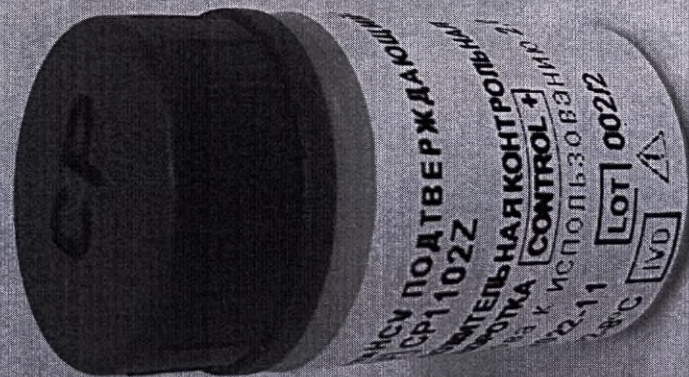


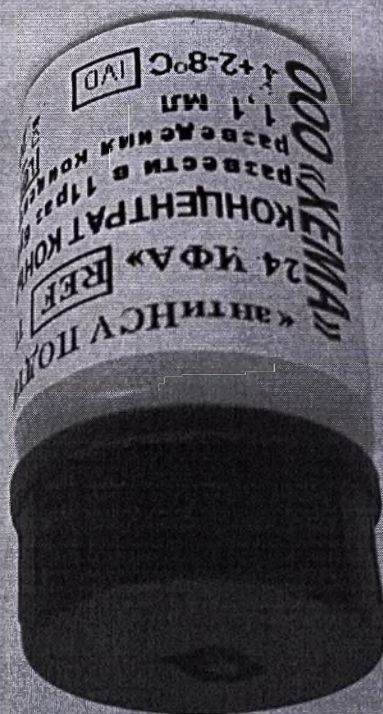

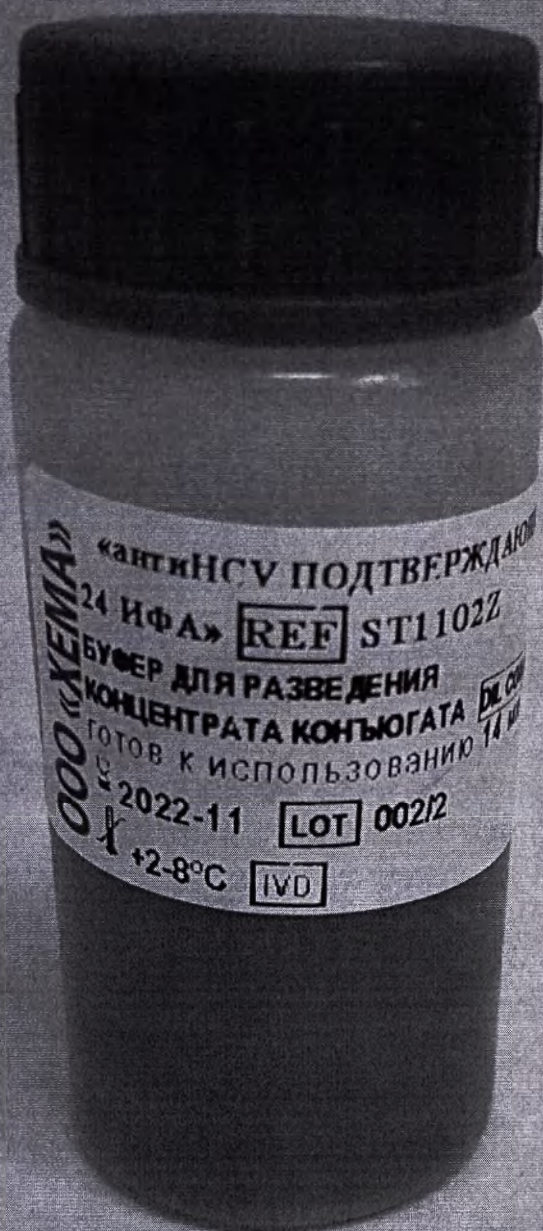

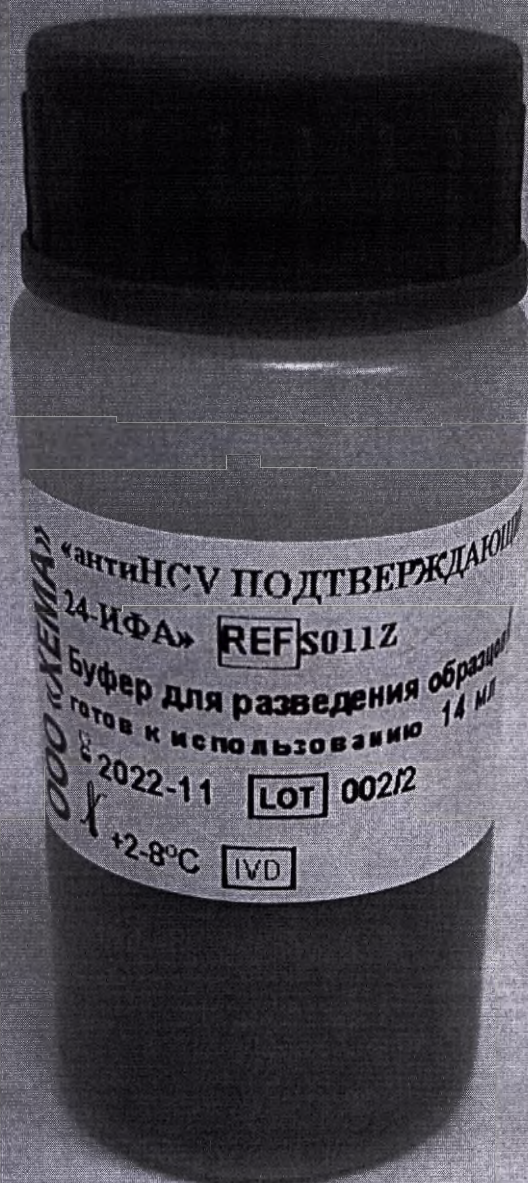


11

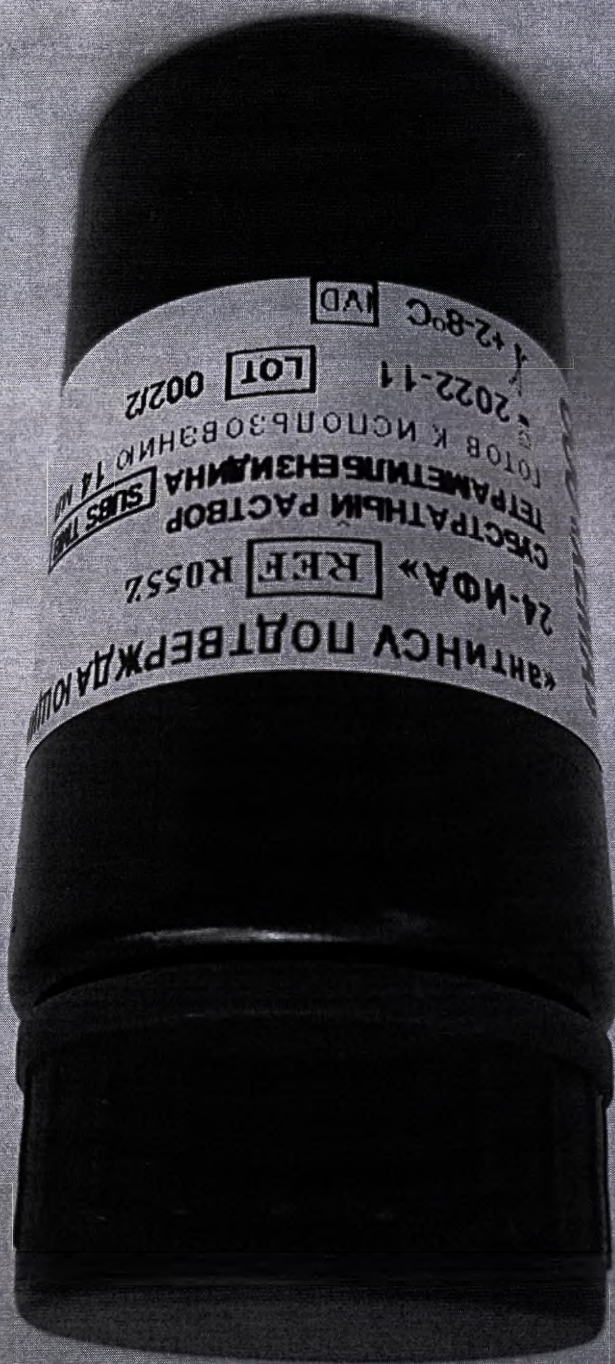


12

ООО «ХЕМА»
«АНТИНСУ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ»
24-ИФА» РЕФ S008Z
КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО РАСТВОРА
50 мл
БУФ WASH 26X
развести в 25 раз
2022-11 LOT 00212
2-8°C IVD

13

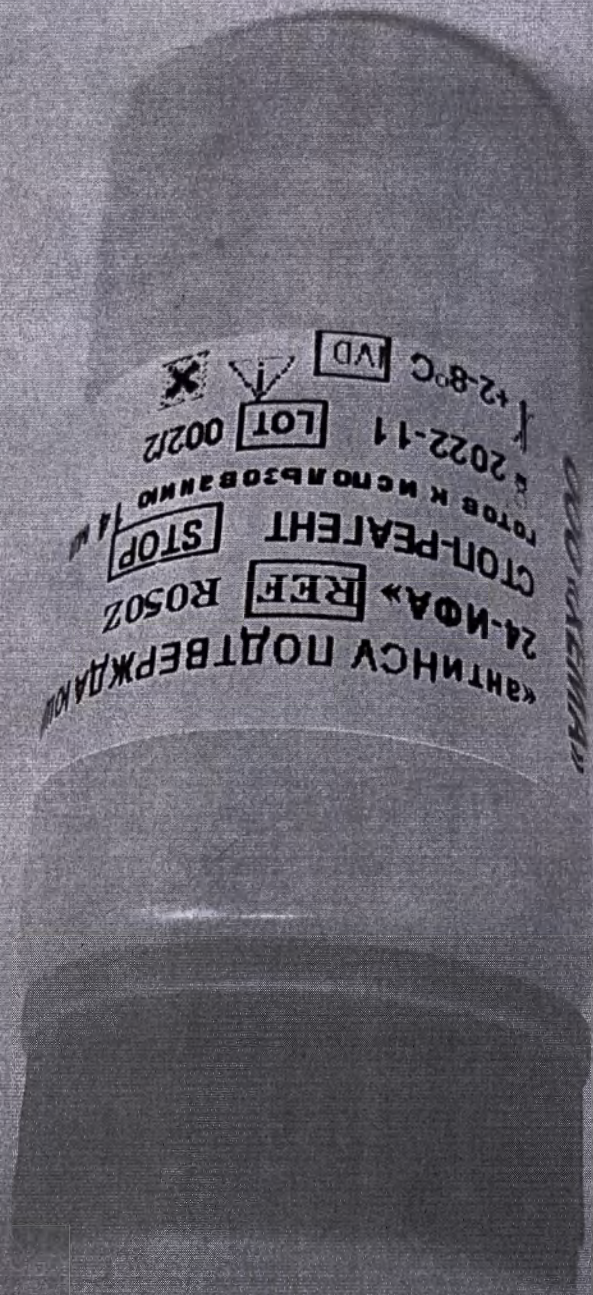

44

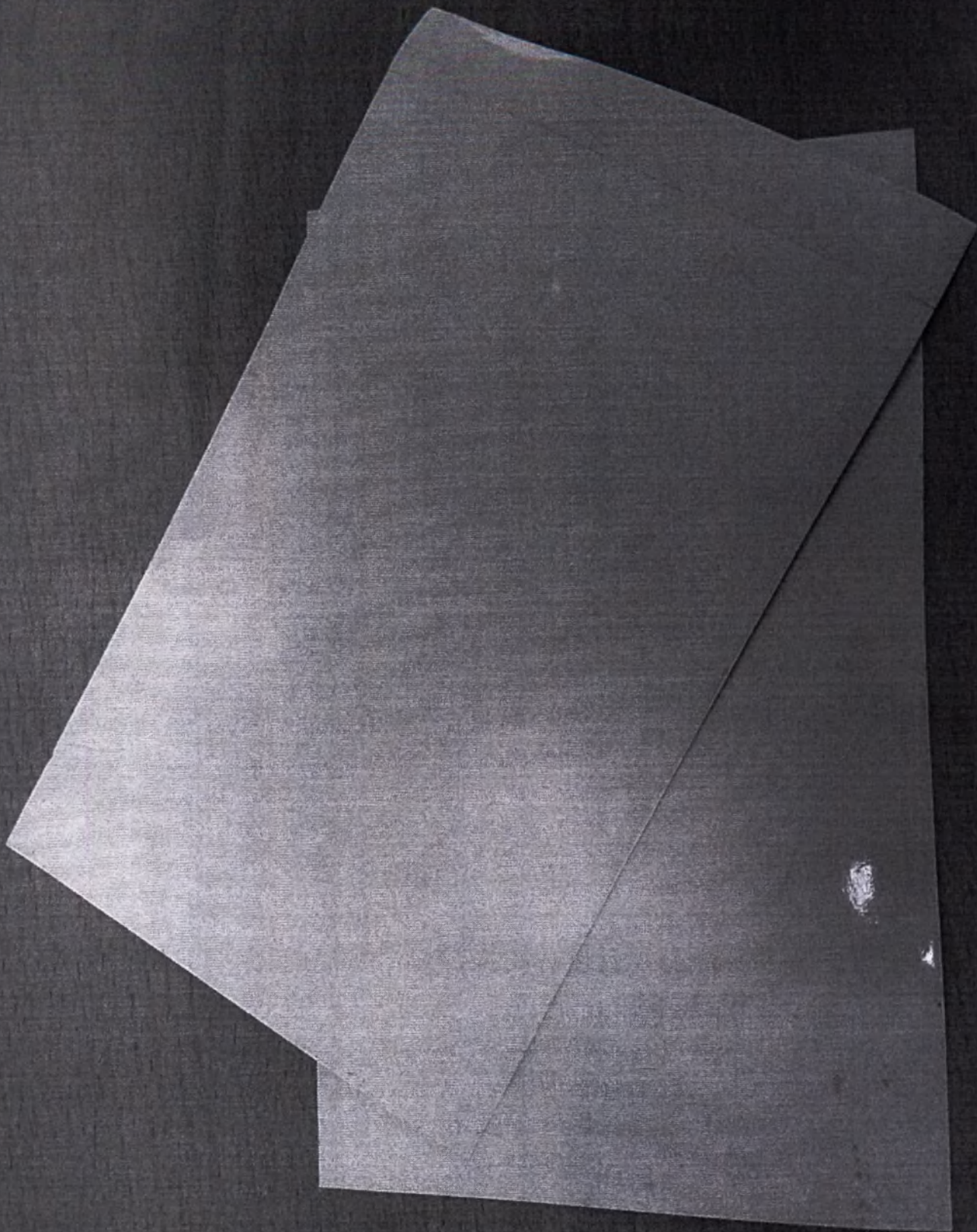

ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ


14

листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю. С. Лебедин

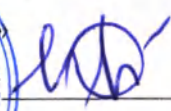

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Лебедин Ю.С.

« 03 » декабря 2021 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител
к вирусу гепатита С (HCV) и подтверждения результатов скрининга
«антиHCV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»**

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»

М.П. ХЕМА
« 01 » октября 2021 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (HCV) и подтверждения результатов скрининга «антиHCV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»



Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу
гепатита С (НСV) и подтверждения результатов скрининга
«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

REF K110C.24 LOT Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен  ГГГГ/ММ


Годен до  ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

 +2-8°C

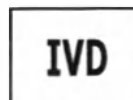

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Лебедин Ю.С.

« 01 » октября 2021 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител
к вирусу гепатита С (HCV) и подтверждения результатов скрининга
«антиHCV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»**

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG и IgM антител к вирусу гепатита С (HCV) и подтверждения результатов скрининга «антиHCV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА»

REF K110C.24 LOT 002/2

Годен до 2022-11

Комплектация для 24 определений

ТУ 21.20.23-1102-18619450-2021

РУ _____ от _____

«Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген вируса гепатита В (HBsAg), отсутствуют».

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инаktivирована.

Для профессионального применения.

 143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD  +2-8°C     

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF K110C.24 LOT 002/2 Σ24

Годен до 2022-11

Состав набора:

		символ	CONT	серия	LOT
Планшет 96-луночный	1 шт	SORB MTP	P1102Z	002/2	
Отрицательная контрольная сыворотка	1 x 3,0 мл	CONTROL-	CN1102Z	002/2	
Положительная контрольная сыворотка	1 x 2,0 мл	CONTROL+	CP1102Z	002/2	
Концентрат конъюгата	1 x 1,1 мл	CONJ 11X	T1102XZ	002/2	
Буфер для разведения концентрата конъюгата	1 x 14 мл	DIL CONJ	ST1102Z	002/2	
Буфер для разведения образцов	1 x 14 мл	DIL	S011Z	002/2	
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 мл	SUBS TMB	R055Z	002/2	
Концентрат отмывочного раствора	1 x 50 мл	BUF WASH 26X	S008Z	2009	
Стоп-реагент	1 x 14 мл	STOP	R050Z	002/2	
Бумага для заклеивания планшета	2 шт		N003		
Инструкция по применению	1 шт		K110C.24I		
Паспорт контроля качества	1 шт		K110C.24Q		

«Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген вируса гепатита В (HBsAg), отсутствуют»

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD +2-8°C



K110C.24002/2112022

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF P1102Z

ПЛАНШЕТ SORB MTP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2022-11 LOT 002/2

+2-8°C IVD



«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF CN1102Z

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА CONTROL -

готова к использованию 3,0 мл

 2022-11 LOT 002/2

 +2-8°C IVD 

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF CP1102Z

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА CONTROL +

готова к использованию 2,0 мл

 2022-11 LOT 002/2

 +2-8°C IVD 

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF T1102ZКОНЦЕНТРАТ КОНЬЮГАТА CONJ 11X

развести в 11 раз буфером для разведения

концентрата конъюгата 1,1 мл

 2022-11 LOT 002/2 +2-8°C IVD

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF ST1102Z

БУФЕР ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

КОНЦЕНТРАТА КОНЬЮГАТА DIL CONJ

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл

 2022-11 LOT 002/2

 +2-8°C IVD

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF S011Z

БУФЕР ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ DIL

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл

 2022-11 LOT 002/2

 +2-8°C IVD

«антиHCV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА (ТМБ) SUBS TMB

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл

 2022-11 LOT 002/2

 +2-8°C IVD

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО

РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 50 мл

 2022-11 LOT 2009

 +2-8°C IVD

«антиНСV ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ-24-ИФА» REF R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ STOP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл

 2022-11 LOT 002/2

 +2-8°C IVD  

ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

15

листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедки

