


«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Head of Regulatory Affairs & QM  
(должность/position)

Bernd Walker  
(имя/name)

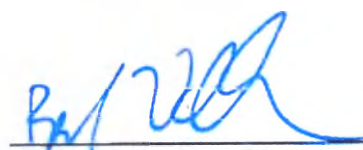

(подпись/signature)

**VITA Zahnfabrik**  
H. Rauter GmbH & Co. KG  
D-79713 BAD SACKINGEN

«15» 05 2023г.  
«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)  
М.П. / Stamp

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Материал реставрационный стоматологический VITA,  
варианты исполнения: VITA AMBRIA®; VITA LUMEX® AC,**

производства VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, (ВИТА  
Цанфабрик, Г.Раутер ГмбХ энд Ко. КГ), Германия

### **Unterschriftsbeglaubigung**

Vorstehende, vor mir anerkannte Unterschriften von

Herr Bernd Walker,  
geboren am 13.09.1962,  
geschäftsansässig Spitalgasse 3 in 79713 Bad Säckingen 3 in 79713 Bad  
Säckingen,  
persönlich bekannt

beglaubige ich hiermit öffentlich.

Die vorstehend unterschriebene Anmeldung bzw. Erklärung habe ich nach § 378  
Abs. 3 S. 1 FamFG bzw. § 15 Abs. 3 S. 1 GBO auf Eintragungsfähigkeit geprüft.

Bad Säckingen , den 15.05.2023

**Stadler, Notar**



## Оглавление

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация.....</b> | <b>3</b>   |
| Производитель .....                                                            | 17         |
| Место производства .....                                                       | 17         |
| <b>2. Назначение и применения изделия .....</b>                                | <b>17</b>  |
| Назначение .....                                                               | 17         |
| Вид контакта с организмом .....                                                | 17         |
| Условия применения .....                                                       | 17         |
| Потенциальные потребители медицинского изделия .....                           | 17         |
| <b>3. Особые свойства изделия .....</b>                                        | <b>17</b>  |
| Принцип действия .....                                                         | 17         |
| Описание изделия .....                                                         | 17         |
| Показания: .....                                                               | 31         |
| Противопоказания: .....                                                        | 32         |
| Потенциальные осложнения .....                                                 | 32         |
| <b>4. Предупреждения и меры предосторожности.....</b>                          | <b>33</b>  |
| Предупреждения .....                                                           | 33         |
| Меры предосторожности .....                                                    | 33         |
| <b>5. Инструкции по применению .....</b>                                       | <b>33</b>  |
| <b>6. Техническая спецификация.....</b>                                        | <b>77</b>  |
| Комплект поставки изделия .....                                                | 109        |
| <b>7. Маркировка и упаковка .....</b>                                          | <b>129</b> |
| <b>8. Соответствие стандартам Российской Федерации.....</b>                    | <b>131</b> |
| <b>9. Транспортирование, хранение и эксплуатация.....</b>                      | <b>131</b> |
| <b>10. Сведения о стерильности изделия.....</b>                                | <b>132</b> |
| <b>11. Сведения об утилизации .....</b>                                        | <b>132</b> |
| <b>12. Гарантии.....</b>                                                       | <b>132</b> |



## 1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация

Материал реставрационный стоматологический VITA, варианты исполнения: VITA AMBRIA®; VITA LUMEX® AC:

### I. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®:

1. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade A1-T, size S).
2. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade A2-T, size S).
3. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade A3-T, size S).
4. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade B1-T, size S).
5. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade B2-T, size S).
6. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade C2-T, size S).
7. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade D2-T, size S).
8. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade A1-HT, size S).
9. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade A2-HT, size S).
10. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade A3-HT, size S).
11. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade B1-HT, size S).
12. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade B2-HT, size S).
13. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade C2-HT, size S).
14. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade D2-HT, size S).
15. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade A1-T, size L).
16. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade A2-T, size L).
17. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade A3-T, size L).
18. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade B1-T, size L).
19. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade B2-T, size L).
20. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade C2-T, size L).
21. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade D2-T, size L).



22. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade A1-HT, size L).
23. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade A2-HT, size L).
24. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade A3-HT, size L).
25. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade B1-HT, size L).
26. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade B2-HT, size L).
27. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade C2-HT, size L).
28. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade D2-HT, size L).
29. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M1-T, size S).
30. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M3-T, size S).
31. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M1-HT, size S).
32. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M3-HT, size S).
33. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M1-T, size L).
34. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M3-T, size L).
35. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M1-HT, size L).
36. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M3-HT, size L).

**Принадлежности:**

1. Жидкость для смешивания VITA AMBRIA® INVEST F, 1000 мл.
2. Порошок паковочный VITA AMBRIA® INVEST P, 50 пакетиков по 100 гр.

**II. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC:**

1. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M1, 12 g.).
2. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M2, 12 g.).
3. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M3, 12 g.).
4. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 1 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 1 M1, 12 g.).
5. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 1 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 1 M2, 12 g.).
6. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 L1.5, 12 g.).



- [illegible]



- [illegible]



- [illegible]



79. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A4, 50 g.).
80. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B1, 50 g.).
81. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B2, 50 g.).
82. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B3, 50 g.).
83. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B4, 50 g.).
84. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C1, 50 g.).
85. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C2, 50 g.).
86. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C3, 50 g.).
87. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C4, 50 g.).
88. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок D2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade D2, 50 g.).
89. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок D3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade D3, 50 g.).
90. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок D4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade D4, 50 g.).
91. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 0 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M1, 12 g.).
92. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 0 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M2, 12 g.).
93. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 0 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M3, 12 g.).
94. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 1 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M1, 12 g.).
95. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 1 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M2, 12 g.).
96. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L1.5, 12 g.).
97. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L2.5, 12 g.).
98. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M1, 12 g.).



99. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M2, 12 g.).
100. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M3, 12 g.).
101. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R1.5, 12 g.).
102. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R2.5, 12 g.).
103. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L1.5, 12 g.).
104. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L2.5, 12 g.).
105. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M1, 12 g.).
106. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M2, 12 g.).
107. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M3, 12 g.).
108. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R1.5, 12 g.).
109. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R2.5, 12 g.).
110. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L1.5, 12 g.).
111. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L2.5, 12 g.).
112. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M1, 12 g.).
113. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M2, 12 g.).
114. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M3, 12 g.).

115. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R1.5, 12 g.).
116. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R2.5, 12 g.).
117. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 5 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M1, 12 g.).
118. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 5 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M2, 12 g.).
119. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 5 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M3, 12 g.).
120. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 0 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M1, 50 g.).
121. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 0 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M2, 50 g.).
122. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 0 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M3, 50 g.).
123. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 1 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M1, 50 g.).
124. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 1 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M2, 50 g.).
125. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L1.5, 50 g.).
126. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L2.5, 50 g.).
127. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M1, 50 g.).
128. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M2, 50 g.).
129. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M3, 50 g.).
130. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R1.5, 50 g.).



131. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 2 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R2.5, 50 g.).
132. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L1.5, 50 g.).
133. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L2.5, 50 g.).
134. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M1, 50 g.).
135. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M2, 50 g.).
136. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M3, 50 g.).
137. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R1.5, 50 g.).
138. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 3 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R2.5, 50 g.).
139. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L1.5, 50 g.).
140. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L2.5, 50 g.).
141. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M1, 50 g.).
142. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M2, 50 g.).
143. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M3, 50 g.).
144. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R1.5, 50 g.).
145. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 4 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R2.5, 50 g.).
146. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 5 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M1, 50 g.).

147. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 5 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M2, 50 g.).
148. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок 5 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M3, 50 g.).
149. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A1, 12 g.).
150. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE A2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A2, 12 g.).
151. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A3, 12 g.).
152. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A3,5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A3,5, 12 g.).
153. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A4, 12 g.).
154. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B1, 12 g.).
155. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B2, 12 g.).
156. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B3, 12 g.).
157. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B4, 12 g.).
158. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C1, 12 g.).
159. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C2, 12 g.).
160. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C3, 12 g.).
161. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C4, 12 g.).
162. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок D2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D2, 12 g.).



163. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок D3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D3, 12 g.).
164. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок D4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D4, 12 g.).
165. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A1, 50 g.).
166. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A2, 50 g.).
167. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A3, 50 g.).
168. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A3.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A3.5, 50 g.).
169. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок A4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A4, 50 g.).
170. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B1, 50 g.).
171. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B2, 50 g.).
172. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B3, 50 g.).
173. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок B4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade B4, 50 g.).
174. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C1, 50 g.).
175. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C2, 50 g.).
176. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C3, 50 g.).
177. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок C4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade C4, 50 g.).
178. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок D2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D2, 50 g.).

179. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок D3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D3, 50 g.).
180. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, оттенок D4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D4, 12 g.).
181. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок smoky white, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade smoky white, 12 g.)
182. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок light blonde, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade light blonde, 12 g.).
183. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок misty rose, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade misty rose, 12 g.).
184. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок sunlight, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade sunlight, 12 g.).
185. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок sun intense, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade sun intense, 12 g.).
186. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок waterdrop, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade waterdrop, 12 g.).
187. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок deep blue, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade deep blue, 12 g.).
188. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, оттенок foggy grey, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade foggy grey, 12 g.).
189. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, оттенок cloudy-white, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade cloudy-white, 12 g.).
190. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, оттенок caramel, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade caramel, 12 g.).
191. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, оттенок honey, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade honey, 12 g.).
192. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, оттенок copper, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade copper, 12 g.).
193. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, оттенок brown, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade brown, 12 g.).
194. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, оттенок arctic white, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade arctic white, 12 g.).



195. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, оттенок cream, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade cream, 12 g.).
196. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, оттенок cappuccino, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade cappuccino, 12 g.).
197. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, оттенок sand, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade sand, 12 g.).
198. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, оттенок sesame, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade sesame, 12 g.).
199. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC PEARL, оттенок shell, 12 г. (VITA LUMEX® AC PEARL, shade shell, 12 g.).
200. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MAMELON, оттенок saffron, 12 г. (VITA LUMEX® AC MAMELON, shade saffron, 12 g.).
201. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MAMELON, оттенок honey melon, 12 г. (VITA LUMEX® AC MAMELON, shade honey melon, 12 g.).
202. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, оттенок opal neutral, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, shade opal neutral, 12 g.).
203. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, оттенок opal sky, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, shade opal sky, 12 g.).
204. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, оттенок opal azure, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, shade opal azure, 12 g.).
205. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок light, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade light, 12 g.).
206. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок medium, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade medium, 12 g.).
207. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок intense, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade intense, 12 g.).
208. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок clear, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade clear, 12 g.).
209. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок fog, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade fog, 12 g.).
210. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок light, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade light, 50 g.).
211. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок medium, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade medium, 50 g.).
212. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок intense, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade intense, 50 g.).
213. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок clear, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade clear, 50 g.).
214. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL, оттенок fog, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade fog, 50 g.).
215. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CORRECTIVE, оттенок neutral, 12 г. (VITA LUMEX® AC CORRECTIVE, shade neutral, 12 g.).
216. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CORRECTIVE, оттенок desert, 12 г. (VITA LUMEX® AC CORRECTIVE, shade desert, 12 g.).



217. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок pale papilla, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade pale papilla, 12 g.).
218. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок light rose, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade light rose, 12 g.).
219. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок nectarine, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade nectarine, 12 g.).
220. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок grapefruit, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade grapefruit, 12 g.).
221. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок rosewood, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade rosewood, 12 g.).
222. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок purple, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade purple, 12 g.).
223. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок deep red, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade deep red, 12 g.).
224. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA, оттенок dark red, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade dark red, 12 g.).
225. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE, оттенок opaque-0, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-0, 12 g.).
226. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE, оттенок opaque-1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-1, 12 g.).
227. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE, оттенок opaque-2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-2, 12 g.).
228. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE, оттенок opaque-3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-3, 12 g.).
229. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE, оттенок opaque-4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-4, 12 g.).
230. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE, оттенок opaque-5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-5, 12 g.).
231. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MARGIN, оттенок straw-yellow, 12 г. (VITA LUMEX® AC MARGIN, shade straw-yellow, 12 g.).
232. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MARGIN, оттенок corn-yellow, 12 г. (VITA LUMEX® AC MARGIN, shade corn-yellow, 12 g.).
233. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, оттенок ivory, 12 г. (VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, shade ivory, 12 g.).
234. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, оттенок almond, 12 г. (VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, shade almond, 12 g.).
235. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, оттенок hazelnut, 12 г. (VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, shade hazelnut, 12 g.).

#### **Принадлежности:**

1. Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC (VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID), 50 ml./50мл.
2. Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC (VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID), 250ml./250 мл.



Далее по тексту - Материал реставрационный стоматологический VITA, материал реставрационный стоматологический VITA, материал реставрационный, материал стоматологический, материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, жидкость для смешивания VITA AMBRIA®, порошок паковочный VITA AMBRIA®, материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC, жидкость моделирующая VITA LUMEX®, жидкость моделирующая VITA LUMEX®

#### **Производитель**

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, (ВИТА Цанфабрик, Г.Раутер ГмбХ энд Ко. КГ)

Spitalgasse 3,D - 79713 Bad Säckingen, Germany, Германия.

+49(0)7761/562-0

info@vita-zahnfabrik.co

#### **Место производства**

Spitalgasse 3,D - 79713 Bad Säckingen, Germany, Германия.

## **2. Назначение и применения изделия**

#### **Назначение**

для использования зубным техником

для создания эстетической части стоматологической реставрации.

#### **Вид контакта с организмом**

постоянный контакт (более 30 суток) с мягкими и костными тканями

#### **Условия применения**

К эксплуатации данного изделия допускается зубной техник и стоматолог

#### **Потенциальные потребители медицинского изделия**

Пациенты, потерявшие зуб или зубы

## **3. Особые свойства изделия**

#### **Принцип действия**

Изделия используются для создания эстетической части стоматологической реставрации.

Гранулы формуются в печи для обжига и прессования на основе восковой модели необходимой реставрации.

#### **Описание изделия**

VITA LUMEX® AC – это натуральная облицовочная керамика из полевого шпата с мелкой структурой, подходящая для облицовки цельнокерамических субструктур.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Для маскировки субструктур, например, титановый абатмент в translucentном диоксиде циркония.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <p>Цвета</p>                                                                        | <div>  opaque-0              opaque-1              opaque-2              opaque-3              opaque-4              opaque-5 </div> |                                                                                     |                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Для воспроизведения основного цвета на реставрациях с тонкими стенками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Цвета                                                                               | VITA classical A1–D4 и VITA SYSTEM 3D-MASTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
|    | Для воспроизведения основного цвета в пришеечной области и в области тела                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| Цвета                                                                               | VITA classical A1–D4 и VITA SYSTEM 3D-MASTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
|    | Для воспроизведения цвета и света на эмали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
| Цвета                                                                               |  light  medium  intense  clear  fog                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
|    | Воссоздание десны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| Цвета                                                                               |  pale-papilla  light-rose  nectarine  grapefruit  rosewood  purple  deep-red  dark-red |                                                                                     |                                                                                       |
|  | Для воспроизведения эффектов в области шейки / дентина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Цвета                                                                               |  cloudy-white  caramel  honey  copper  brown                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |
|  | Для увеличения хроматичности в области шейки, особенно при малой толщине слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Цвета                                                                               |  ivory  almond  hazelnut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|  | Для создания глубинного флуоресцентного эффекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Цвета                                                                               |  arctic-white  cream  cappuccino  sand  sesame                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|  | Для керамического плеча и корректировок в области кромок**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Цвета                                                                               |  straw-yellow  corn-yellow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |






|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Для воспроизведения мамелонов в инцизальном участке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| Цвета                                                                               |  saffron  honey-melon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|    | Универсально применимые транслюцентные эмалевые эффект-массы для воспроизведения цветовых эффектов в инцизальном участке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
| Цвета                                                                               |  smoky-white  light-blonde  misty-rose  sunlight  sun-intense<br> waterdrop  deep-blue  foggy-grey |                                                                                     |                                                                                       |
|    | Для воспроизведения опалового эффекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| Цвета                                                                               |  opal-neutral  opal-sky  opal-azure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|   | Для воспроизведения перламутровых эффектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| Цвета                                                                               |  shell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|  | Для корректировок после глянцеобразующего обжига на пониженной температуре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Цвета                                                                               |  neutral  desert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |

|                                                                                              |  |  |        |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  opaque-1 | A1                                                                                  | A1                                                                                  |  light |  intense clear |  cream                                                                                                            |  cloudy-white                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  ivory                                                                                                    |
|  opaque-2 | A2                                                                                  | A2                                                                                  |  light |  fog           |  arctic-white<br> cappuccino* |  aramel<br> honey<br> copper<br> brown |  almond<br> hazelnut |
|  opaque-2 | A3                                                                                  | A3                                                                                  |  light |                                                                                                   |  sand                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |                                                                                                   |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sesame*        |  |  |
|  |  opaque-3   | A3.5 | A3.5 |  medium   |  |  sesame         |  |  |
|  |  opaque-3   | A4   | A4   |  medium   |  |  arctic-white   |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sand*          |  |  |
|  |  opaque-1   | B1   | B1   |  medium   |  |  arctic-white   |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  cream*         |  |  |
|  |  opaque-1   | B2   | B2   |  medium   |  |  arctic-white   |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  cappuccino*    |  |  |
|  |  opaque-3   | B3   | B3   |  medium   |  |  cream          |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sand*         |  |  |
|  |  opaque-3 | B4   | B4   |  medium |  |  sand         |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sesame*      |  |  |
|  |  opaque-3 | C1   | C1   |  medium |  |  arctic-white |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sesame*      |  |  |
|  |  opaque-2 | C2   | C2   |  medium |  |  cream        |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sesame*      |  |  |
|  |  opaque-3 | C3   | C3   |  light  |  |  sesame       |  |  |
|  |  opaque-4 | C4   | C4   |  light  |  |  cappuccino   |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sesame       |  |  |
|  |  opaque-2 | D2   | D2   |  medium |  |  cream        |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  sesame*      |  |  |
|  |  opaque-3 | D3   | D3   |  medium |  |  cream        |  |  |
|  |                                                                                              |      |      |                                                                                            |  |  cappuccino*  |  |  |



|  |          |    |    |        |  |                                                              |  |  |
|--|----------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
|  | opaque-3 | D4 | D4 | medium |  | <input type="radio"/> cream<br><input type="radio"/> sesame* |  |  |
|--|----------|----|----|--------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|

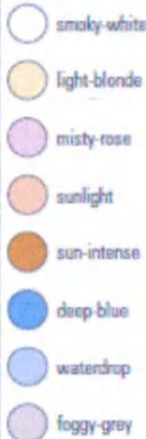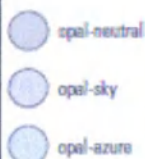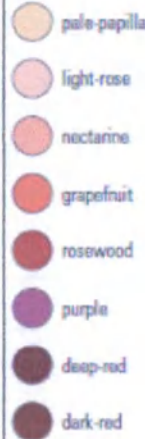
| MARGIN                                                                              | MAMELON                                                                             | TRANS-LUCENT                                                                       | OPAL TRANS-LUCENT                                                                   | PEARL                                                                               | GINGIVA                                                                              | CORRECTIVE                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |




|       | OPAQUE                                                                                       | OPAQUE DENTINE | DENTINE | ENAMEL                                                                                    |                                                                                         | FLUO INTENSE                                                                                      | DENTINE MODIFIER                                                                                  | CHROMA INTENSE                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0M1   |  opaque-0   | 0M1            | 0M1     |  light   |  clear |  arctic-white   |  cloudy-white  |  ivory    |
| 0M2   |  opaque-0   | 0M2            | 0M2     |  light   |  fog   |  arctic-white   |  caramel       |  almond   |
| 0M3   |  opaque-0   | 0M3            | 0M3     |  light   |                                                                                         |  arctic-white   |  honey         |  hazelnut |
| 1M1   |  opaque-1   | 1M1            | 1M1     |  light   |                                                                                         |  arctic-white   |  brown         |                                                                                              |
| 1M2   |  opaque-1   | 1M2            | 1M2     |  light   |                                                                                         |  cream*         |                                                                                                   |                                                                                              |
| 2L1.5 |  opaque-2  | 2L1.5          | 2L1.5   |  light  |                                                                                         |  cream          |                                                                                                   |                                                                                              |
| 2L2.5 |  opaque-2 | 2L2.5          | 2L2.5   |  light |                                                                                         |  arctic-white  |                                                                                                   |                                                                                              |
| 2M1   |  opaque-2 | 2M1            | 2M1     |  light |                                                                                         |  cream*       |                                                                                                   |                                                                                              |
| 2M2   |  opaque-2 | 2M2            | 2M2     |  light |                                                                                         |  arctic-white |  cappuccino* |                                                                                              |
| 2M3   |  opaque-2 | 2M3            | 2M3     |  light |                                                                                         |  sand         |                                                                                                   |                                                                                              |
| 2R1.5 |  opaque-2 | 2R1.5          | 2R1.5   |  light |                                                                                         |  sesame*      |                                                                                                   |                                                                                              |
|       |                                                                                              |                |         |                                                                                           |                                                                                         |  arctic-white |  cappuccino* |                                                                                              |
|       |                                                                                              |                |         |                                                                                           |                                                                                         |  cream        |                                                                                                   |                                                                                              |
|       |                                                                                              |                |         |                                                                                           |                                                                                         |  sand*        |                                                                                                   |                                                                                              |
|       |                                                                                              |                |         |                                                                                           |                                                                                         |  arctic-white |  sesame*     |                                                                                              |

|       |                                                                                            |       |       |                                                                                          |                                                                                                 |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2R2.5 |  opaque-2 | 2R2.5 | 2R2.5 |  light  |  Cream        |  |  |
|       |                                                                                            |       |       |                                                                                          |  sand*        |  |  |
| 3L1.5 |  opaque-3 | 3L1.5 | 3L1.5 |  medium |  cream        |  |  |
|       |                                                                                            |       |       |                                                                                          |  sesame*      |  |  |
| 3L2.5 |  opaque-3 | 3L2.5 | 3L2.5 |  medium |  sand         |  |  |
|       |                                                                                            |       |       |                                                                                          |  sesame*      |  |  |
| 3M1   |  opaque-3 | 3M1   | 3M1   |  light  |  arctic-white |  |  |
|       |                                                                                            |       |       |                                                                                          |  sesame*      |  |  |
| 3M2   | opaque-3                                                                                   | 3M2   | 3M2   |  light  |  cream        |  |  |
|       |                                                                                            |       |       |                                                                                          |  sesame*      |  |  |

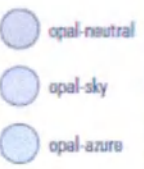



| MARGIN                                                                              | MAMELON                                                                             | TRANS-LUCENT                                                                       | OPAL TRANS-LUCENT                                                                   | PEARL                                                                               | GINGIVA                                                                              | CORRECTIVE                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |

Воспроизведение цвета по стандарту VITA SYSTEM 3D-MASTER
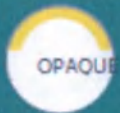
|                         |             |  |  |            |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3M</b><br><b>3</b>   |  opaque-3   | 3M3                                                                               | 3M3                                                                               |  light     | <br> |  sand<br> sesame*          |  cloudy-white                                                                                         |  ivory<br> almond<br> hazelnut |
| <b>3R</b><br><b>1.5</b> |  opaque-3   | 3R1.5                                                                             | 3R1.5                                                                             |  light     |                                                                                                                                                                        |  cream<br> cappuccino*     |  caramel<br> honey |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3R</b><br><b>2.5</b> |  opaque-3   | 3R2.5                                                                             | 3R2.5                                                                             |  medium    |                                                                                                                                                                        |  sesame                                                                                                      |  copper<br> brown  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4L</b><br><b>1.5</b> |  opaque-4   | 4L1.5                                                                             | 4L1.5                                                                             |  light     |                                                                                                                                                                        |  sesame                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4L</b><br><b>2.5</b> |  opaque-4  | 4L2.5                                                                             | 4L2.5                                                                             |  light    |                                                                                                                                                                        |  cappuccino<br> sand*   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4M</b><br><b>1</b>   |  opaque-4 | 4M1                                                                               | 4M1                                                                               |  light   |                                                                                                                                                                        |  sesame                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4M</b><br><b>2</b>   |  opaque-4 | 4M2                                                                               | 4M2                                                                               |  intense |                                                                                                                                                                        |  cream<br> cappuccino* |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4M</b><br><b>3</b>   |  opaque-4 | 4M3                                                                               | 4M3                                                                               |  intense |                                                                                                                                                                        |  sesame                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4R</b><br><b>1.5</b> |  opaque-4 | 4R1.5                                                                             | 4R1.5                                                                             |  light   |                                                                                                                                                                        |  cream<br> cappuccino* |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4R</b><br><b>2.5</b> |  opaque-4 | 4R2.5                                                                             | 4R2.5                                                                             |  intense |                                                                                                                                                                        |  cappuccino<br> sand*  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|         |                                                                                                |     |     |                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5M<br>1 |  opaque-<br>5 | 5M1 | 5M1 |  light       |  |  cappuccino<br> sesame* |  |  |
| 5M<br>2 |  opaque-<br>5 | 5M2 | 5M2 |  inte<br>nse |  |  sesame                                                                                                   |  |  |
| 5M<br>3 |  opaque-<br>5 | 5M3 | 5M3 |  inte<br>nse |  | cappuccino<br> sand*                                                                                      |  |  |
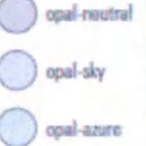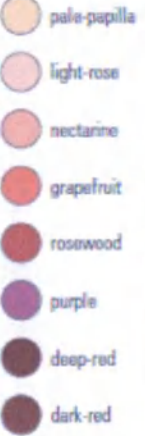
| MARGIN                                                                             | MAMELON                                                                            | TRANS-LUCENT                                                                       | OPAL TRANS-LUCENT                                                                  | PEARL                                                                             | GINGIVA                                                                              | CORRECTIVE                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.





Рисунок 1. – Внешний вид VITA LUMEX® AC

VITA AMBRIA® – прессованные гранулы, изготовленные из силиката лития, с упрочнением из диоксида циркония, для изготовления реставраций методом прессования. VITA AMBRIA® имеют две степени прозрачности «Т» (полупрозрачный)\* и «НТ» (максимально полупрозрачный)\* в двух размерах (S и L). Цвета гранул «Т» основаны на соответствующих оттенках дентина, а оттенки гранул «НТ» основаны на соответствующих комбинациях дентина и линии края резцов.

VITA AMBRIA T (транслюцентный):

Из-за их низкой транслюцентности и приспособления к соответствующему оттенку дентина, Т-пресс-таблетки особенно подходят для изготовления коронок и трехзвеньевых мостов с использованием методов облицовывания или раскрашивания.

VITA AMBRIA НТ (высоко транслюцентный):

Благодаря их более высокой транслюцентности и цветопередаче, соответствующей смеси из дентиновой массы и массы режущего края, НТ-пресс-таблетки особенно подходят для изготовления вкладок, накладок, виниров и частичных коронок.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 2.



Рисунок 2. - Внешний вид VITA AMBRIA®

Внешний вид принадлежностей представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – изображение принадлежностей для VITA AMBRIA® и VITA LUMEX® AC

Жидкость для смешивания VITA AMBRIA® INVEST F, 1000 мл





|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Порошок паковочный VITA<br/>AMBRIA® INVEST P, 50 пакетиков<br/>по 100 гр</p> |  |
| <p>Жидкость моделирующая VITA<br/>LUMEX® AC</p>                                 |  |

## Общие показания, противопоказания и побочные эффекты

### Показания:

1. VITA LUMEX® AC подходит для облицовки цельнокерамических субструктур.

Показания:

- Полная и неполная облицовка диоксидом циркония
- Полная и неполная облицовка дисиликатом лития
- Неполная облицовка керамикой из полевого шпата

2. VITA AMBRIA®

VITA AMBRIA® – прессованные гранулы, изготовленные из силиката лития, с упрочнением из диоксида циркония, для изготовления реставраций методом прессования.

- Оклюзионные виниры (Table Tops – ровная верхность), виниры
- Вкладки, накладки, неполные коронки
- Коронки в переднем и заднем отделе
- Трехэлементные мостовидные протезы переднего зубного отдела до второго премоляра в качестве опорной дуги
- Единичные зубные реставрации в качестве опорной головки на имплантатах переднего и заднего отделов
- Трехэлементные мостовидные протезы в качестве опорной головки имплантата до второго премоляра на абатментах имплантата
- Промежуточные опорные головки имплантата отдельных зубов переднего и заднего отделов

### **Противопоказания:**

#### **1. VITA LUMEX® AC не использовать:**

- Субструктуры с неподходящими значениями КТР и свойствами материала
- Пациентам с аллергией или чувствительностью к составу изделия
- В случае недостаточного места
- Недостаточная гигиена полости рта
- Бруксизм

#### **2. VITA AMBRIA® не использовать:**

- В случаях ненадлежащей гигиены полости рта
- В случае недостаточно точных результатов подготовки кромок (например, тангенциальной подготовки)
- В случае недостаточного количества твердой ткани зуба
- В случае недостатка пространства
- Усиленная деятельность: для пациентов с чрезмерной окклюзионной функцией, в частности при сильном стискивании или сжимании зубов
- Восстановление нежизнеспособных зубов у пациентов с усиленной деятельностью
- Эндодонтические коронки
- Мосты задней зубной дуги в области коренных зубов
- Мостовидные протезы из более, чем 3 элементов, с опорной вкладкой/ мостовидный протез типа «Мэриленд»
- Консольные мостовидные протезы
- Пациентам с аллергией или чувствительностью к ингредиентам
- Обычную или самоклеящую установку вкладок, накладок, виниров, неполных коронок и окклюзионных виниров (Table Top)
- В случае установки временной коронки

### **Потенциальные осложнения**

Ятрогенное повреждение твердого вещества зуба, пульпы и/или мягких тканей полости рта  
Применение процедуры стоматологического бондинга и согласование зубных реставраций влечет за собой общий риск послеоперационной гиперчувствительности.

В случае несоблюдения инструкций по применению, проявление характеристик изделия гарантировано быть не может, что может повлечь неспособность свойств изделий и



необратимое повреждение натурального твердого вещества зуба, пульпы и / или мягких тканей полости рта.

Успешность проведения любой зубной реставрации зависит от ее прилегания к основной структуре зуба с минимальными отклонениями. Возможность регулярно проводить однородную, надежную и хорошо подогнанную реставрацию требует строгого соблюдения определенных принципов. Плохо подготовленный десневой край влечет удержание зубного налета, что приводит к воспалению десен и краевому подтеканию, что может привести к последующему кариесу, повышению чувствительности, атрофии десневого края, растворению цементного вещества и потеря прикрепления реставрации или ухудшению цветового соответствия.

Аллергическая реакция на компоненты.

## **4. Предупреждения и меры предосторожности**

### **Предупреждения**

- Может вызвать карциному при вдыхании.
- Вызывает раздражение кожи.
- Только для промышленного применения.
- Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз и лица. При необходимости используйте средства индивидуальной защиты.
- Специальная обработка: снять загрязненную одежду и постирать перед повторным ношением.
- Держите взаперти.
- Утилизируйте содержимое/ резервуар в соответствии с местными / региональными / государственными / международными требованиями
- Опасная пыль образуется при измельчении в сухом состоянии (после обжига).

### **Меры предосторожности**

Во время работы иметь на себе защитные очки/маску, защитные перчатки и защитную одежду.

## **5. Инструкции по применению**

### **1. VITA LUMEX® AC**



\* Данный процесс проводить не обязательно, так как субструктуры выполнены из дисиликата лития, но он может быть проведен дополнительно.

3. Подготовка каркаса

3.1 Нанесение DENTINE





4 Каркас после обжига DENTINE

**Примечание:**

Для хорошей связки VITA LUMEX® AC с керамическим каркасом рекомендуется обжиг DENTINE.

Смешайте массу DENTINE с моделирующей жидкостью VITA LUMEX® AC до водянистого состояния массы. С помощью кисточки наносить равномерным тонким слоем на чистую и сухую поверхность.

Для большей флуоресценции или опалесценции из глубины можно использовать другие массы, например, FLUO INTENSE или OPAQUE DENTINE.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

Этот этап работы не является необходимым для каркасов из дисиликата лития, но может быть выполнен дополнительно.

**Обжиг:**


| Рекомендуемый обжиг каркасов из диоксида циркония |           |              |                |           |        |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                                             | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                               | 4.00      | 50           | 800            | 1.00      | вкл.   |

| Рекомендуемый обжиг стеклокерамики |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Vt. C | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
|-------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| 400   | 4.00      | 50           | 760            | 1.00      | вкл.   |

#### 4. Стандартная полная облицовка

##### 4.1 Примерная схема послойного построения A2

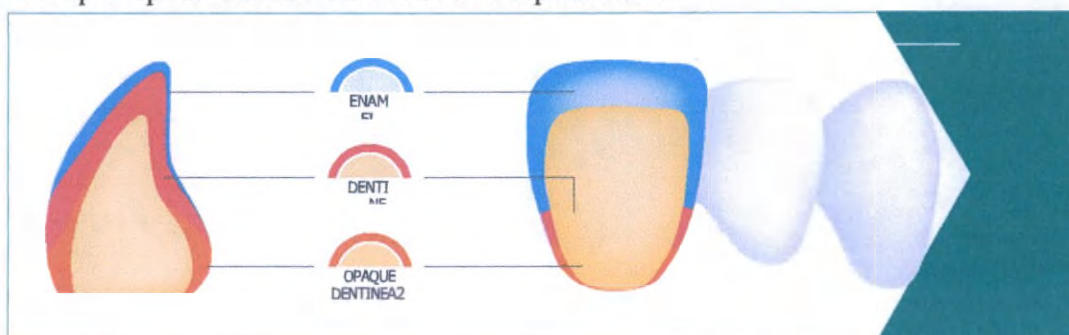

#### Примечание:

Как правило, стандартная полная облицовка выполняется с помощью масс DENTINE и ENAMEL.

Дополнительно можно также использовать непрозрачные массы OPAQUE DENTINE.

Дополнительное использование масс OPAQUE DENTINE рекомендуется в следующих случаях:

чтобы избежать уменьшения насыщенности цвета на промежуточных звеньях, особенно в области десны, для точного воспроизведения областей с интенсивным цветом, таких как окклюзионные поверхности моляров, для поддержки цветового эффекта в условиях ограниченного пространства (<0,8 мм).

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

Соотношение толщины слоев DENTINE и ENAMEL может влиять на интенсивность цвета реставрации. Интенсивный цвет достигается за счет большой толщины слоя масс OPAQUE DENTINE и DENTINE - чем выше пропорция слоя ENAMEL, тем бледнее конечный результат.

##### 4.2 Нанесение DENTINE





Примечание:

- Для того, чтобы легко снимать реставрацию с модели, модель необходимо предварительно обработать изоляционным средством VITA Modisol
- Чтобы не было различия в цвете между опорными зубами и промежутками, OPAQUE DENTINE наносится базально и в области шейки на промежутке.
- При ограниченном пространстве (особенно на клыках), нанесите тонкий слой массы OPAQUE DENTINE перед нанесением дентина и эмали. Это обеспечивает точную цветопередачу, особенно при толщине слоя менее 0,8 мм.
- Для правильной ориентировки по размеру, форме и расположению зуба необходимо наносить дентин, в соответствии с анатомическими особенностями зуба.

#### 4.3 Нанесение ENAMEL, 1-й обжиг дентина



**Примечание:**

- Для оптимального нанесения эмалевой массы необходимо уменьшить слой DENTINE в верхней трети.
- Для поддержания необходимого уровня влажности во время работы необходимо перед нанесением эмали весь зуб осторожно увлажнить кисточкой от палатинальных плоскостей в межзубные пространства.
- Для завершения формы коронки наносится эмаль малыми порциями.
- Для компенсации обжиговой усадки слегка преувеличьте анатомический объем реставрации.
- Перед первым обжигом дентина слегка увлажненным инструментом следует провести сепарацию в межзубных пространствах до каркаса.
- После снятия моста с модели контактные точки восполняются с помощью масс DENTINE и ENAMEL.
- Затем мост помещается на обжиговой трегер.

**Обжиг**

| Рекомендуемый режим 1-го обжига дентина* |   |  |                |   |        |
|------------------------------------------|---|--|----------------|---|--------|
| Vt. C                                    | → |  | ок.<br>Темп. C | → | вакуум |



|     | мин. | °C/мин. |     | мин. |      |
|-----|------|---------|-----|------|------|
| 400 | 6.00 | 50      | 760 | 1.00 | вкл. |

#### 4.4 Корректировка формы, 2-й обжиг DENTINE



1 Реставрация после первого обжига дентина.



2 Обработка модели изоляционным средством.



3 Нанести OPAQUE DENTINE, DENTINE



4 Нанесение массы ENAMEL ...



5 ... шаг 2.

#### Примечание:

- Перед помещением реставрации на модель его нужно снова изолировать средством VITA Modisol. Благодаря этому нанесенный базально материал не будет прилипать к модели.
- Корректировка формы, начиная от области шейки выполняется с помощью масс OPAQUE DENTINE/DENTINE и ENAMEL

#### Обжиг:

| Рекомендуемый режим 2-го обжига дентина* |           |         |                |           |        |
|------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                                    | →<br>мин. | °C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                      | 6.00      | 50      | 755            | 1.00      | вкл.   |

#### 4.5 Обработка реставрации



1 Пришлифовать контактные точки.



2 Корректировка формы ...



3 ... шаг 2.



4 ... Шаг 3.



5 Готовая реставрация.

Примечание:


- После обжига реставрация располагается на модели, и контактные точки шлифуются.
- Незначительные корректировки формы проводятся с помощью алмазных инструментов; межзубные пространства сепарируются алмазным диском.
- Затем выполняется поверхностная структура, напр., делаются возрастные бороздки или вогнутые или выпуклые места.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:


- Перед обжигом глазури/красителей реставрация должна быть тщательно очищена от шлифовальной пыли зубной щеткой под проточной водой или пароструем.

#### 4.6 Индивидуальное окрашивание/глазурирование реставрации



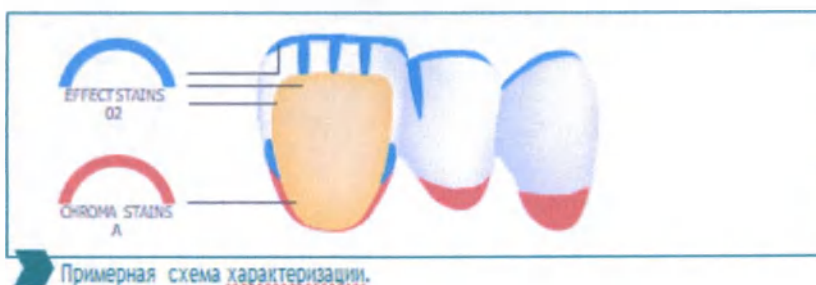

1 Нанесение глазури:

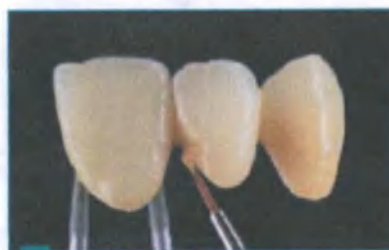

2 Нанесение красителей.

Примечание:

- При необходимости покрыть реставрацию с помощью VITA AKZENT PLUS GLAZE LT.
- Для увеличения интенсивности цвета в области шейки подходят красители VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINS.
- Для воспроизведения индивидуальных особенностей используются красители VITA AKZENT PLUS EFFECT STAINS.


Обжиг:

Рекомендуемый режим глянцеобразующего обжига с VITA AKZENT® PLUS GLAZE LT\*

| Vt. C | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
|-------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| 400   | 4.00      | 80           | 750            | 1.00      | —      |

5. Частичная облицовка после техники Cut-Back

5.1 Примерная схема послойного построения

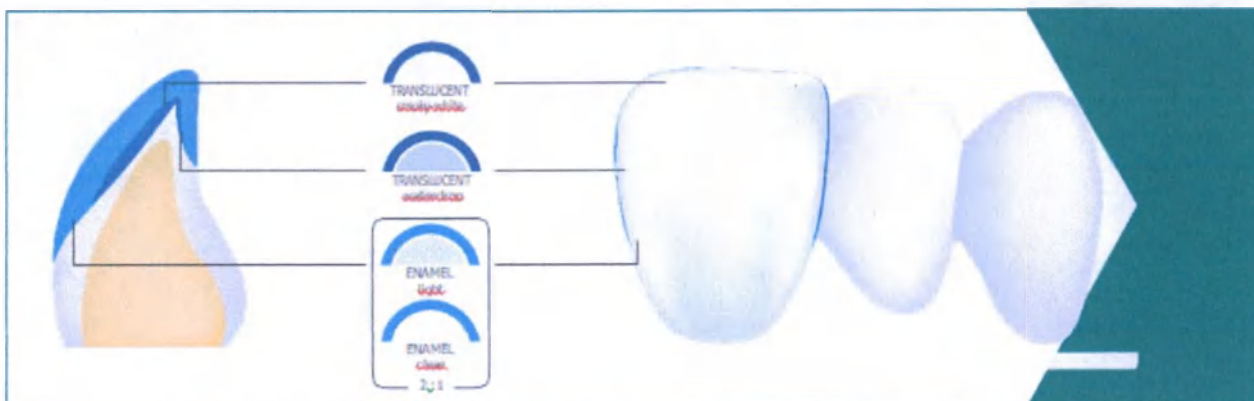

Примечание:

- Цвет дентина формируется за счет Cut-back-каркаса, индивидуальная, инцизальная характеристика выполняется с помощью керамических масс ENAMEL и TRANSLUCENT. Пожалуйста, соблюдайте следующее:
- При уменьшении каркаса в инцизальной области необходимо соблюдать рекомендации производителя относительно минимальной толщины стенок.

## 5.2 Характеризация после обжига водянистого дентина



1 анатомически редуцированная реставрация.



2 Нанесение водянистого дентина ...



3 ... шаг 2.



4 затем реставрацию глазуровать/характеризовать.



5 Результат после обжига.

Примечание:

- Для обжига водянистого дентина используйте ENAMEL, при минимальной толщине стенок в качестве альтернативы можно также использовать VITA AKZENT PLUS GLAZE LT.
- Для увеличения интенсивности цвета в области шейки подходят красители VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINS.
- Для воспроизведения индивидуальных особенностей используются красители VITA AKZENT PLUS EFFECT STAINS

Пожалуйста, соблюдайте следующее:



- Этот этап работы не является необходимым для каркасов из дисиликата лития, но может быть выполнен дополнительно.

Обжиг:

| Рекомендуемый обжиг каркасов из диоксида циркония |           |              |                |           |        |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                                             | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                               | 4.00      | 50           | 800            | 1.00      | вкл.   |

| Рекомендуемый обжиг стеклокерамики |           |              |                |           |        |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                              | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                | 4.00      | 50           | 760            | 1.00      | вкл.   |

### 5.3 Нанесение ENAMEL



1 Результат после послойного построения эмали.



2 Реставрация после обработки.


Примечание:

- Небольшими порциями массы ENAMEL, начиная с нижней трети коронки, достройте коронку до полной формы зуба. Для компенсации обжиговой усадки слегка преувеличьте анатомический объем реставрации.

Обжиг

| Рекомендуемый режим 1-го обжига дентина* |           |              |                |           |        |
|------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                                    | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                      | 6.00      | 50           | 760            | 1.00      | вкл.   |

## 5.4 Индивидуальное окрашивание/глазурование реставрации

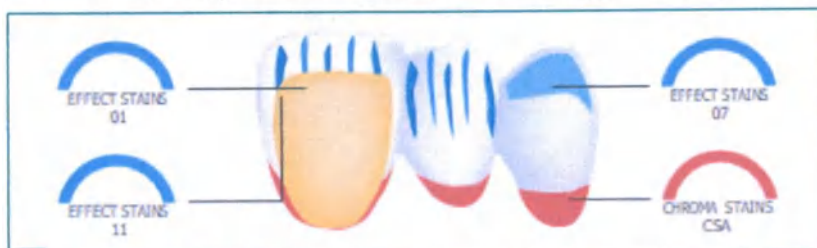

Примерная схема характеристики.



1 Результат после нанесения глазури.



2 Результат после нанесения красителей.

Примечание:

- При необходимости покрыть реставрацию с помощью VITA AKZENT PLUS GLAZE LT.
- Для увеличения интенсивности цвета в области шейки подходят красители VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINS.
- Для воспроизведения индивидуальных особенностей используются красители VITA AKZENT PLUS EFFECT STAINS.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Опционально можно использовать глазурь, см. Обжиг глазури глава "Воспроизведение цвета/обжиг."

Обжиг:


| Рекомендуемый режим глянцеобразующего обжига с VITA AKZENT® PLUS GLAZE LT* |           |              |                |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                                                                      | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                                                        | 4.00      | 80           | 750            | 1.00      | —      |

## 6. Индивидуальная полная облицовка

### 6.1 Схема послойного построения:

пример облицовки переднего зуба молодого пациента в цвете A2



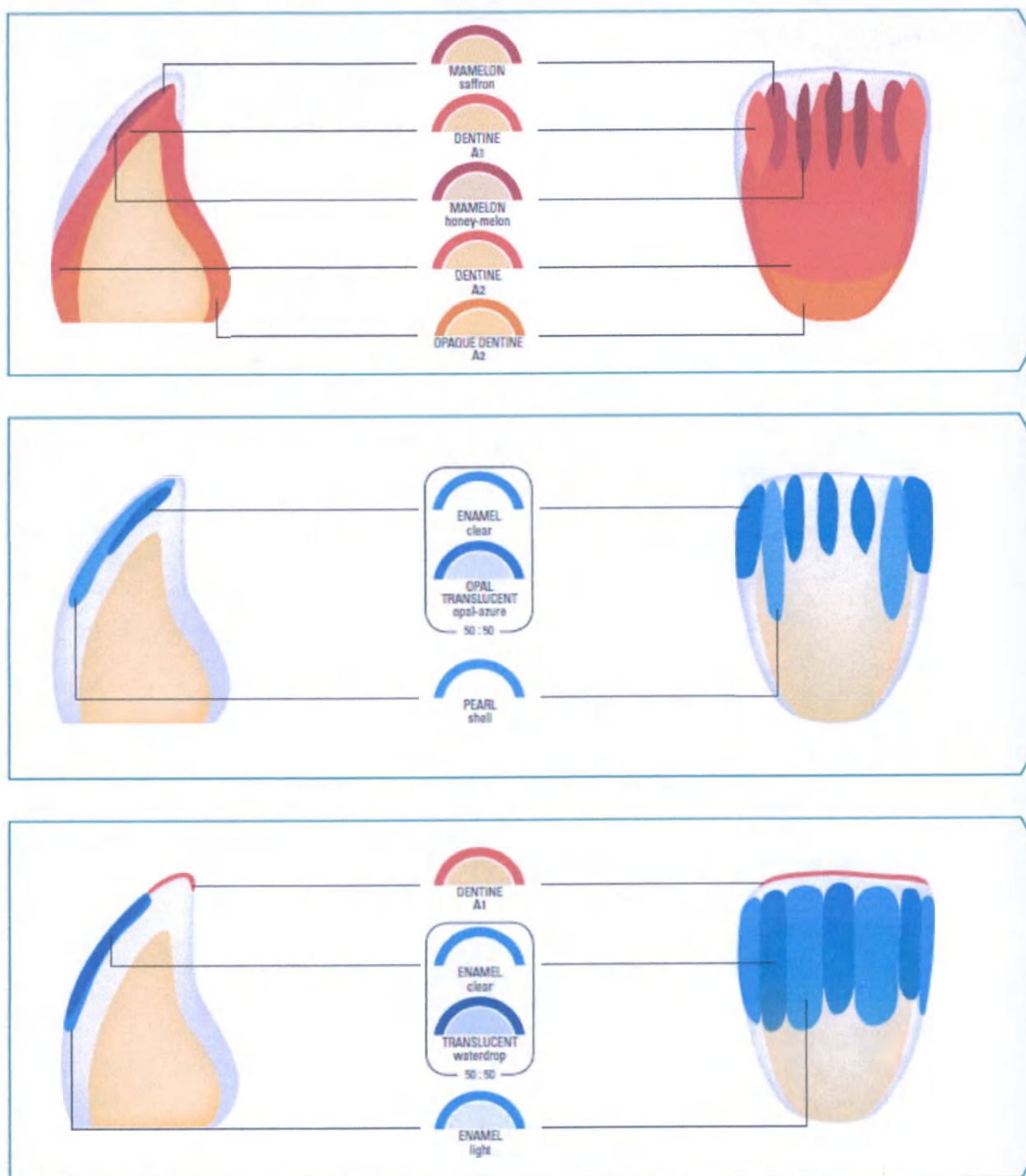

6.2 Индивидуальная облицовка переднего зуба молодого пациента



1 Каркас после обработки на модели.



2 Результат после обжига воднистого дентина с DENTINE A1.



3 Результат после нанесения OPAQUE DENTINE.



4 Нанесение дентина.



5 Выполнить Cut-back.



6 Результат после Cut-back.



7 Нанесение массы MAMELON.



8 Нанесение массы EFFECT.



9 Нанесение массы ENAMEL.



10 Облицованная реставрация.



11 Реставрация после обжига.



12 Реставрация после обработки.



13 С помощью красителей VITA AKZENT PLUS индивидуализированная реставрация.

#### Рекомендация:

- В данном примере для увеличения интенсивности пришеечной области использовался краситель CHROMA STAINS и дополнительно выполнено легкое опыление с помощью массы FLUO INTENSE.
  - Опыление поверхностей с FLUO INTENSE позволяет сделать поверхность пористой, на которой впоследствии свет, проникающий в реставрацию, естественно преломляется.
- Обжиг:



| Рекомендуемый режим 1-го обжига дентина |           |              |                |           |        |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|
| Vt. C                                   | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | ок.<br>Темп. C | →<br>мин. | вакуум |
| 400                                     | 6.00      | 50           | 760            | 1.00      | Вкл.   |

## 7 Воспроизведение цвета/обжиг

### 7.1 Обзор обжигов керамики и красителей

| Параметры обжига                            |        |           |              |              |           |         |           |      |
|---------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|------|
| Название программы                          | Vt. °C | →<br>мин. | ↗<br>°C/мин. | Темп. ок. °C | →<br>мин. | ↘<br>°C | →<br>мин. | Vac. |
| очистительный обжиг Т                       | 500    | 3:00      | 33           | 700          | 5.00      | —       | —         | —    |
| очистительный обжиг НТ                      | 290    | 10:00     | 10           | 600          | 5.00      | —       | —         | —    |
| Обжиг водянистого дентина диоксида циркония | 400    | 4:00      | 50           | 800          | 1.00      | —       | —         | Вкл. |
| Обжиг водянистого дентина теклокерамики     | 400    | 4:00      | 50           | 760          | 1.00      | —       | —         | Вкл. |
| 1-й обжиг дентина                           | 400    | 6:00      | 50           | 760          | 1.00      | 500*    | —         | Вкл. |
| 2-й обжиг дентина                           | 400    | 6:00      | 50           | 755          | 1.00      | 500*    | —         | Вкл. |
| Глянцевый обжиг                             | 400    | 0:00      | 80           | 750          | 1.00      | 500*    | —         | —    |

|                                                                            |     |      |    |     |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-----|------|------|---|------|
| Глянцобразующий<br>обжиг<br>красителей<br><br>VITA AKZENT<br>PLUS GLAZE LT | 400 | 4:00 | 80 | 750 | 1.00 | 500* | — | —    |
| Корректирующий<br>обжиг<br>средством<br>CORRECTIVE                         | 400 | 4:00 | 50 | 725 | 1.00 | 500* | — | вкл. |


\*) Длительное охлаждение реставрации из диоксида циркония до соответствующей температуры рекомендуется для последнего запланированного обжига керамики. Положение лифта печи VITA VACUMAT > 75%. В помещении, где проводится обжиг, не должно быть сквозняков.

Примечание:

- Вследствие малой теплопроводности оба вещества (Y-TZP и облицовочная керамика) в этой связке могут подвергнуться более сильным остаточным напряжениям, чем это имеет место в металлокерамике. Для предотвращения образования остаточного термического напряжения в облицовочной керамике рекомендуется более медленное охлаждение во время обжига до достижения температуры трансформации облицовочной керамики (VITA LUMEX® AC ок. 550 C).

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Эти значения можно рассматривать лишь как ориентировочные для техника. Если структура поверхности, транслюцентности или глянец недостаточно выражены, нужно соответственно изменить режим обжига.
- Решающим фактором для проведения обжига является не температура обжига, которую показывает печь, а внешний вид изделия после обжига.
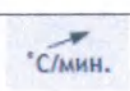
| Объяснение символов на изделии                                                              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vt. C                                                                                       | Стартовая температура                                      |
| →<br>мин.                                                                                   | Время сушки, мин., время закрытия                          |
|  °C/мин. | Время нагрева, мин, подъем температуры температура, °C/мин |
| Темп. ок. °C                                                                                | Конечная температура                                       |
| →<br>мин.                                                                                   | Выдержка конечной температуры                              |




|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| ↙<br>°C   | Длительное охлаждение                 |
| →<br>мин. | Время выдержки, длительное охлаждение |
| Vac мин.  | Выдержка в вакууме, мин               |


## 2. VITA AMBRIA®



## 2.2 Исполнение полноанатомических реставраций

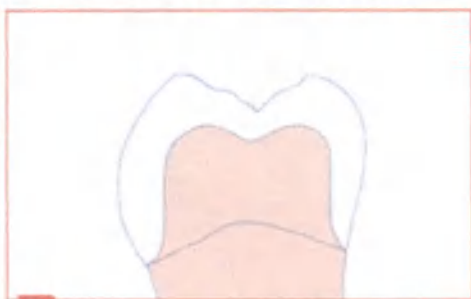

Исполнение коронки для бокового зуба

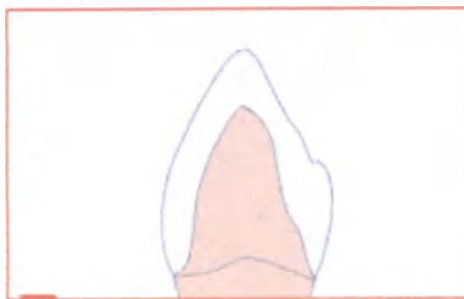


Исполнение коронки для переднего зуба

Примечание:

- Должна соблюдаться минимальная толщина стенок, применимая для соответствующего варианта материала.
- Желательна равномерная толщина стенки.

## 2.3 Частичная облицовка и техника Cut-Back

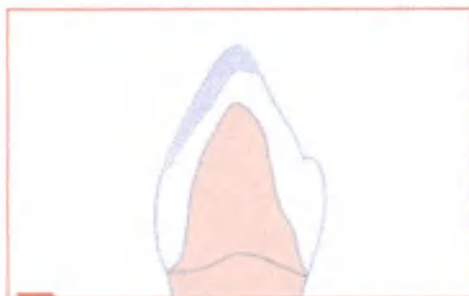

Исполнение каркаса для переднего зуба с помощью техники Cut-Back

Примечание:


- В общем, следует избегать острых краев и тонких кромок.
- Следует соблюдать минимальную толщину стенок каркасов.
- При исполнении каркасов обращайте внимание на анатомически уменьшенную форму зуба.
- Согласно анатомической форме, должна осуществляться поддержка бугров.
- Толщина слоя керамической облицовки должна быть равномерной по всей поверхности.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- При исполнении реставраций с опорой на имплантат, абатмент может иметь острые края, которые с течением времени могут стать причиной сколов на супраструктурах. Острые края, как правило, следует избегать (например, перед сканированием они могут быть скруглены воском).

## 2.4 Исполнение коннекторов на мостовидных протезах




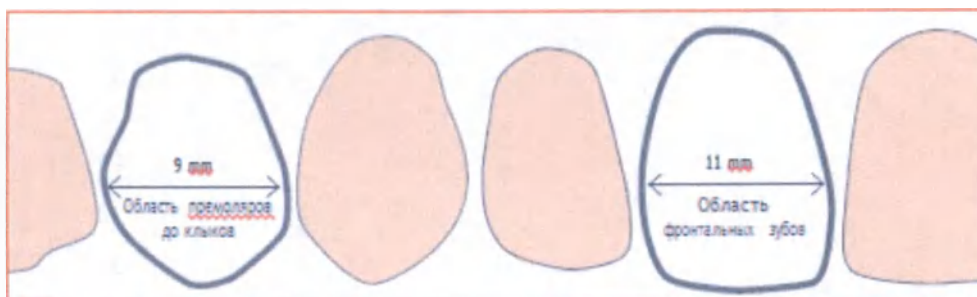


➤ Максимальная ширина звеньев мостовидного протеза во фронтальном и боковом участке

Пожалуйста, соблюдайте следующее:


- Максимально допустимая ширина звена мостовидной конструкции во фронтальной области и в области премоляров различна из-за различных жевательных нагрузок.
- Допустимая ширина звена в передней области составляет 11 мм, а в области премоляра (клык до 2-го премоляра) 9 мм и не должна превышать.

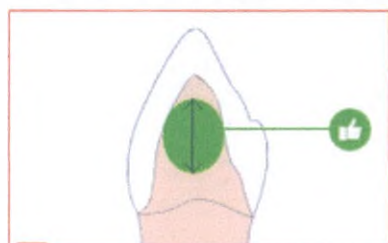

➤ Максимальная высота

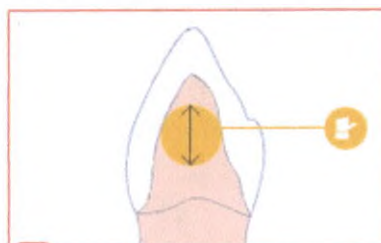

➤ Высота равна ширине

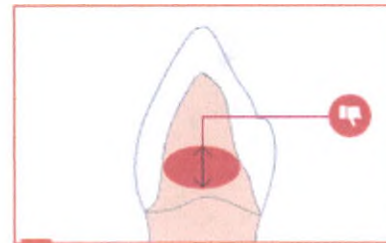

➤ Высота (h) меньше ширины

Примечание:

- Высота h коннекторных участков должна быть как можно выше (рис. 1).
- Высота h должна быть такой же как ширина (рис. 1 и 2).
- Избегать глубоких канавок и острых краев.

### 3. Моделировка

#### 3.1 Подготовка модели и культи



➤ 1 Мастер-модель со съёмными культиями.



➤ 2 Модель после нанесения отвердителя.

Примечание:

- В качестве рабочей модели была изготовлена разборная модель.
- Поднутрения должны быть выблокированы.
- Рекомендуется применять отвердитель для отверждения поверхности и защиты культи.
- Отвердитель не должен приводить к изменению объема культи.

#### 3.2 Нанесение дистанционного лака



➤ 1. Слой дистанционного лака макс. до 1 мм на препарационные границы винира.



➤ 2. Слой дистанционного лака. Та же процедура для коронок.



➤ 1. Слой дистанционного лака макс. до 1 мм на препарационной границе.



➤ 2. Слой дистанционного лака при исполнении мостовидного протеза во фронтальном и боковом участке.



➤ 3. Слой дистанционного лака на внутрикоронковых поверхностях опорных зубов.



➤ 1. Слой дистанционного лака на вкладках, накладках и частичных коронках.



➤ 2. Слой дистанционного лака.



➤ 3. Слой дистанционного лака.

#### Примечание:

- Дистанционный лак должен иметь толщину +/- 10 мкм на слой.
- Реставрации VITA AMBRIA на абатментах выполняются так же, как на естественных культиях.

#### 3.3 Полноанатомическая моделировка





Полностью анатомическая восковая модель передней коронки.



Полностью анатомическая восковая модель боковой коронки.



Восковое моделирование вкладки.



Краевое прилегание при моделировании вкладки.

Примечание:

- После изготовления модели и подготовки культи выполняется восковое моделирование реставрации.
- Перед выкладкой материала необходимо минимально укрепить точки соприкосновения.
- В частности, с вкладками необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить хорошую посадку.

### 3.4 Моделировка для частичной облицовки/Cut-back



Полностью анатомическая восковая модель мостовидной конструкции.



Перед уменьшением установите силиконовый ключ.



Проверьте уменьшенную модель в силиконовом ключе.



Полностью анатомическая восковая модель винира.



Уменьшение в верхней трети для Cut-back.

Примечание:

- Сначала смоделируйте реставрации полностью анатомически, а затем выполните Cut-back.
- Уменьшите восковую модель только в инцизальной трети.
- При нанесении мамелонов избегайте образования острых вершин и краев.
- Необходимо соблюдать минимальную толщину стенок и слоя пресс-материала.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Для традиционного моделирования могут использоваться только органические, сгорающие без остатка воски.
- Указанные минимальные значения толщины слоя и сечения соединителя должны соблюдаться с учетом технологии обработки и показаний.
- Добиваться получения точной модели, в частности, у препарационных границ реставрации.
- Следует избегать чрезмерного моделирования в области края, чтобы обеспечить эффективную и быструю обработку после прессования.
- Для точного прилегания полностью анатомических реставраций после нанесения красителя и глазури не допускайте контакта с восковой моделью, поскольку массы вызывают минимальное изменение объема.

### 3.5 CAD/CAM-моделировка

Примечание:

- При CAD/CAM-моделировании должны быть выполнены следующие шаги:  
Сканирование модели

Проектирование с использованием программного обеспечения

Фрезерование реставрации из фрезерного воска или пластмассы.


Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Фрезерный воск, фрезерная пластмасса или пластмасса для 3D-печати должны быть предварительно проверены на предмет их сгорания без остатка.
- Следует обращать внимание на минимально допустимую толщину и площадь сечения соединительной части.
- При использовании фрезерной пластмассы или пластмассы для 3D-печати:


Чтобы избежать неровностей на поверхности паковочной массы во время нагрева, пластмасса должна быть покрыта тонким слоем воска. При этом рекомендуется слегка наплавить на края коронки тонкий слой пришеечного воска (примерно на 1-2 мм).

### 3.6 Установка литников 100г/200г в муфельной системе




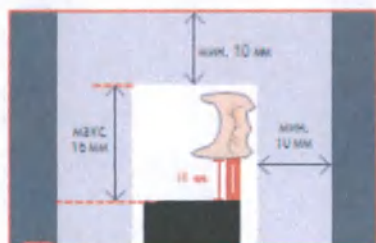


Вкладка в 100-граммовый муфель

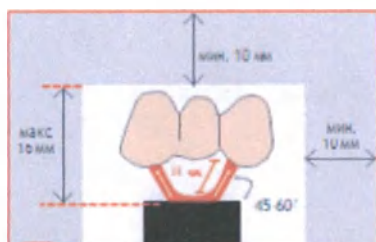

3-звеньевой мостовидный протез

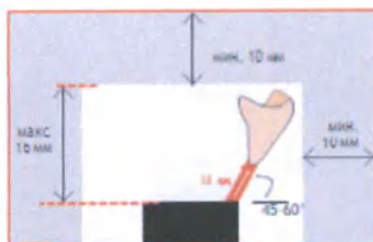

Венд или коронка для фронтального зуба

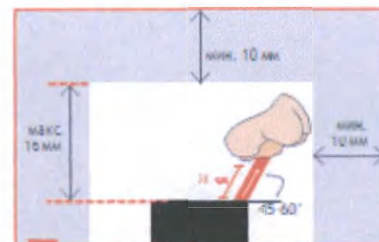

Коронка для бокового зуба, накладка, частичная коронка

#### Примечание:

- Для беспрепятственного перемещения керамического материала всегда устанавливайте литники в направлении потока керамики и в самой массивной части.
- Необходимо соблюдать минимальное расстояние 10 мм между восковыми объектами и силиконовым кольцом.
- Не превышайте максимальную длину (восковой объект + пресс-канал) 16 мм.
- Штифтовать реставрацию к цоколю нужно под углом 45-60.
- Для этого используйте прозрачное муфельное кольцо.

#### Рекомендация:

- Для более легкой паковки рекомендуется закрепить коронки внутренней стороной вверх.

#### 3.7 Штифтование

| Штифтование                    |                       |                                |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                | Одиночные реставрации | 3-звеньевой мостовидный протез |
| Цоколь муфеля                  | 100 г и 200 г         | 200 г                          |
| Восковая проволока             | ø 3 - 4 мм            |                                |
| Длина<br>восковой<br>проволоки | мин. 3 мм, макс. 8 мм |                                |

|                                                |                  |                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина проволоки, объект                        | восковой включая | макс. 16 мм                                                        |                                                                                                         |
| Место прикрепления литника на восковом объекте |                  | самое массивное место на моделировке<br>Моделировка                | на обеих опорах мостовидной конструкции, не устанавливая пресс-канал на звеньях мостовидной конструкции |
| Наклон литника к объекту                       |                  | осевой                                                             |                                                                                                         |
| Наклон литника к цоколю                        |                  | муфельная система 100 г: 80 – 90; муфельная система 200 г: 45 – 60 |                                                                                                         |
| Форма точки присоединения                      |                  | закругленная, без острых углов и граней                            |                                                                                                         |
| Расстояние между объектами                     |                  | мин. 3 мм                                                          |                                                                                                         |
| Расстояние до силиконового кольца              |                  | мин. 10 мм                                                         |                                                                                                         |

|                   |                              |                            |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                   | S-заготовка (маленький блок) | L-заготовка (большой блок) |
| вес воска         | не более 0,75 г              | не более 1,7 г             |
| Муфельная система | 100 г и 200 г                | только 200 г               |

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Перед паковкой необходимо определить вес воска, включая литники, для определения необходимой заготовки прессы VITA AMBRIA.
- Различные типы реставраций (например, вкладки и коронки) не могут паковаться вместе, поскольку паковочная масса должна быть смешана в различном соотношении для каждого типа реставрации.
- В зависимости от муфельной системы (100 г/200 г) следует соблюдать соответствующие принципы штифтования.
- Для муфеля 200 г требуется угол 45-60, для муфеля 100 г - более крутой угол 80-90
- В зависимости от количества и/или веса реставраций выбирается муфельная система 100 г или 200 г.
- При использовании Programat EP 500 (Ivoclar Vivadent) следует учитывать следующее:



При паковке только одного объекта необходимо использовать второй короткий глухой пресс-канал. Это гарантирует, что автоматическое отключение процесса прессования в печи будет работать правильно.

#### 4. Паковка/прессование/распаковка

##### 4.1 Регулирование расширения

| Концентрация жидкости          |                        |                |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Показания                      | Затворная жидкость [%] | дист. вода [%] |
| Коронка                        | 60 – 70                | 40 – 30        |
| 3-звеньевой мостовидный протез | 65 – 75                | 35 – 25        |
| Виниры, окклюзионные виниры    | 50 – 60                | 50 – 40        |
| Вкладки (1-/2-плоскостные)     | 34 – 45                | 65 – 55        |
| MOD-вкладка                    | 40 – 50                | 60 – 50        |
| Накладка                       | 85 – макс. 90          | 15 – 10        |

Примечание:

- В случае коронок на премоляры и передние зубы иметь в виду, что при узких и тонких препарированиях более высокое значение расширения дает лучшие результаты припасовки.
- Приведенные значения расширения являются ориентировочными. Возможны отклонения из-за различных форм препарирования, используемых печей предварительного нагрева, температур прессования и т. д., требующие соответствующих корректировок.
- При использовании пластмасс расширение может отличаться от приведенной выше таблицы.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- На 100 г порошка используйте 23 мл жидкости.
- На 200 г порошка используйте 46 мл жидкости.

##### 4.2 Einbetten



1 Перед паковкой проверьте вес воска и штифтование.



2 Заполните муфельную систему паковочной массой до уровня реставраций



3 Заполните муфельную систему паковочной массой до края



4 оставить таймер на 20 мин, чтобы точно выдержать временной промежуток.

#### Примечание:

- Паковка выполнена с помощью паковочной массы VITA AMBRIA INVEST. Для паковки используется соответствующая МУФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА VITA AMBRIA.

#### Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Не наносите на восковые объекты жидкость для снятия напряжений.
- Температура обработки паковочной масса от 18 до макс. 25 С.
- Смешайте паковочную массу, избегая вдыхания пыли. Надевайте защитную маску.
- Паковка мелких полостей выполняется осторожно с помощью тонких инструментов (например, маленькой кисточки), не допуская повреждения края моделировки.
- Осторожно установите силиконовое кольцо на цоколь без повреждения восковых объектов.
- Кольцо должно быть полностью надето на цоколь.
- Осторожно наполните муфельную систему до края.
- Оставить запакрованную муфельную систему затвердевать.
- Через 20 - 30 минут поместите муфельную систему в печь предварительного нагрева.

| Паковка                  |                                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процесс                  | Длительность                       | Пояснение                                                                                                                                              |
| 1. Мануальное смешивание | 20 - 30 сек. мануальное смешивание | Сначала налейте необходимое количество жидкости в чашку. Затем добавьте паковочную массу. Вручную размешать паковочную массу шпателем до однородности. |

|                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Машинное смешивание | 60 секунд | Смешивать под вакуумом в течение 60 секунд.<br><br>Постоянно контролировать работу вакуумного смесителя. Ненадлежащее вакуумирование приводит к появлению посадочных допусков и газовых пор в отливке.                                            |
| 3. Паковка             | —         | Наполнить муфельную систему паковочной массой: использовать встряхиватель избирательно, когда это представляется необходимым для улучшения растекания. Сильно не встряхивать! Это приводит к образованию пузырьков и расслоению паковочной массы. |

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Диапазон рабочего времени составляет 5-9 минут, при температуре помещения 21 С.
- Рабочее время указано для комнатной температуры, а нагрев сокращает время обработки

#### 4.3 Предварительный нагрев




1 Удалите цокль вращательным движением.



2 Осторожно выдавите опору из силиконового кольца.



3 Удалите остатки паковочной массы с края, не допуская засорения литников.

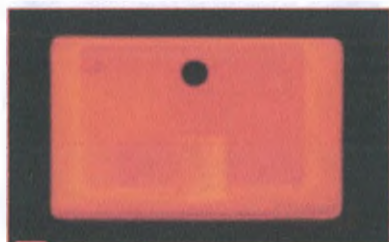

4 Поместите опору в печь отверстием вниз. Не прикасаться к стенке печи.



5 Одноразовый плунжер для прессования и таблетки предварительно не нагревают.

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| Паковка |              |           |
| Процесс | Длительность | Пояснение |



|                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Затвердевание паковочной массы | Не менее 20 мин. Макс. 30 мин.                                | Через 20 минут удалить формирователь муфеля и литниковый цоколь.                                                                                                                                                   |
| 2. Установка муфеля в печь        | Макс. 30 мин. при 850 С                                       | Выровнять опорную поверхность муфеля (например, ножом для гипса).                                                                                                                                                  |
| 3. Муфель прогреть                | При регулировке муфеля                                        | Температура предварительного нагрева 850°С; печь заранее прогреть!                                                                                                                                                 |
| Время выдержки                    | 100 г муфель: не менее 50 мин. 200 г муфеля: не менее 75 мин. | С момента повторного набора температуры предварительного нагрева (850°С) Если в печи предварительного нагрева три или более 100- или 200-ти граммовых муфелей, продлить время выдержки соответственно на 15 минут. |

Примечание:

- Муфель подготавливается к прогреву следующим образом: осторожно удалите неровности на нижней поверхности опоки гипсовым ножом. Проверьте угол 90°. При одновременном прогреве нескольких опок, промаркируйте их соответствующим образом.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- При необходимости прогрева нескольких Speed опок, их следует изготавливать и устанавливать в печь с интервалом 20 минут.
- При установке в печь убедитесь, что не происходит большого падения температуры.
- Время выдержки муфеля с момента повторного набора температуры предварительного нагрева.
- Чтобы избежать слишком быстрого выгорания, при обработке пластмасс муфель должен быть помещен в печь предварительного нагрева при 250 ° С и выдерживаться в течение 1 часа. После этого продолжить постепенный нагрев.
- Не помещать муфель в печь предварительного нагрева вместе с другими отливаемыми деталями или паяными моделями, так как это может привести к окрашиванию оксидами металла.

#### 4.4 Прессование




1 Достижение целевой температуры будет отображаться на дисплее.



2 После открытия печи появляется сообщение «Вставить пресс-материал».




3 Подготовить холодный плунжер и холодную заготовку желаемого цвета.

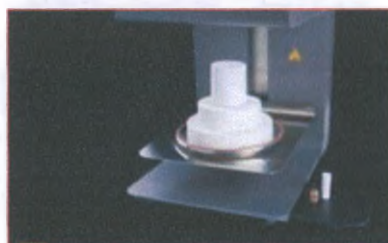

4 Поместите горячий муфель на универсальный пресс-диск.



5 Поместите в него пресс-таблетку логотипом вверх.

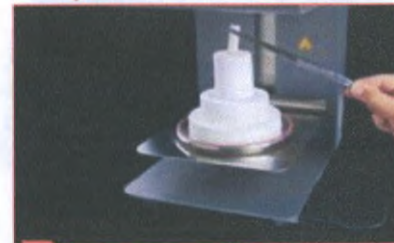

6 Одноразовый плунжер установить на заготовку точкой вверх.



7 Нажатием клавиши СТАРТ запускается желаемая программа.



8 После окончания программы прессования поместите ополку в защищенное место для охлаждения.

| Выбор муфеля                                          |                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       | 100-граммовый муфель            | 200-граммовый муфель                                  |
| Одиночные реставрации                                 | 1 маленькая заготовка (S)       | 1 маленькая заготовка (S) или 1 большая заготовка (L) |
| 3-звеньевой мостовидный протез                        | —                               | макс. 1 большая заготовка (S)                         |
| Пресс-заготовка и одноразовый плунжер для прессования | Помещается в холодном состоянии |                                                       |

#### Примечание:

- Включите пресс-печь (VITA VACUMAT 6000 MP) заранее, чтобы фаза предварительного нагрева была завершена вовремя.
- В качестве альтернативы для прогрева можно запустить программу прессования.
- Вызовите программу прессования для VITA AMBRIA в желаемой степени транслюцентности и подготовьте необходимую пресс-таблетку.



- Поместите горячий муфель в горячую пресс-печь в течение 30 секунд после извлечения из печи предварительного нагрева.
- После процесса прессования немедленно удалите муфель из пресс-печи, используя щипцы для муфеля.


Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Не ускоряйте охлаждение сжатым воздухом.
- Пресс-таблетки можно использовать только один раз.

#### 4.5 Распаковка



1. помощью второго плунжера для прессования определите глубину прессования по маркировке.

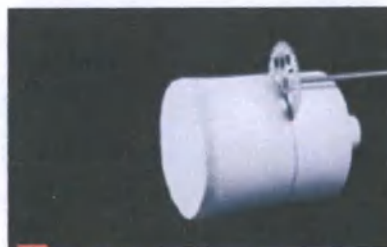

2. Сепарационным диском прорезать паковочную массу вокруг по маркировке.



3. Осторожно расколоть муфель ножом для гилса.



4. Грубая распаковка осуществляется с помощью  $Al_2O_3$  (размер зерна 50  $\mu m$ ) при давлении 4 бара.



5. Затем следует щадящая распаковка и удаление реакционного слоя при давлении 2 бара.



6. окончательно распакованная реставрация без реакционного слоя.

Примечание:


- Удаление реакционного слоя с помощью  $Al_2O_3$  (50 мкм) или стеклянных шариков при макс. давления 2 бара.
- Полностью удалите реакционный слой как внутри, так и снаружи, так как остатки реакционного слоя могут привести к плохой связке между пресс-керамикой и облицовочной керамикой.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Реставрации должны быть обрабатываться под прямым углом.
- Чтобы не повредить края прессованных реставраций при распаковке, необходимо следить за направлением струи и расстоянием до объекта.

#### 4.6 Обработка монолитных реставраций



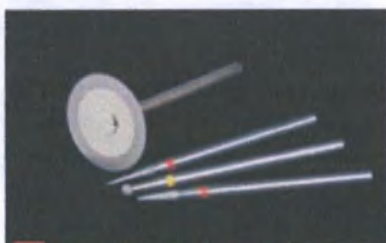

1 Разделять и обрабатывать с помощью соответствующего шлифовального инструмента.




2 Реставрация с отделенным пресс-каналом.




3 Реставрацию припасовать и проверить контактные точки.



4 Пресс-канал шлифовать.

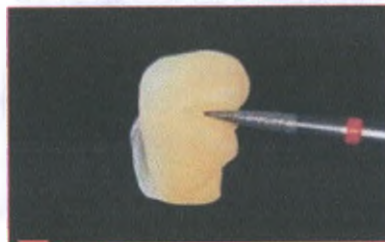

5 Выполнить индивидуальную обработку поверхности.

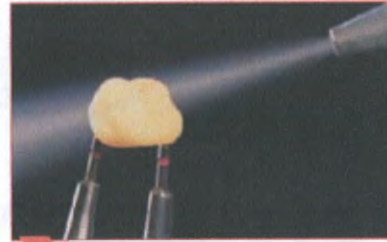

6 Очистить поверхность от шлифовальной пыли и контактных средств.

#### 4.7 Обработка для техники послойного построения



1 пресс-канал отделить с помощью алмазного диска.



2 реставрацию припасовать и шлифовать пресс-каналы.




3 cut-back проверить с помощью силиконового ключа. Редуцирование ограничить до incisальной трети.



4 обработать реставрацию. Сгладить переходы.




5 реставрация после обработки на модели.

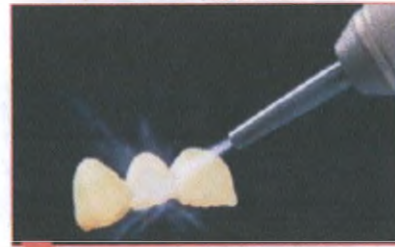

6 реставрацию обработать с помощью  $Al_2O_3$  и макс. 2 бара.



7 перед частичной облицовкой реставрации тщательно очистить реставрацию с помощью пара.

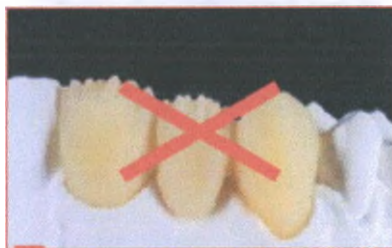

8 При воспроизведении морфологии мамелонов, следует избегать заостренных краев и глубоких борозд.



9 Не разделяйте реставрацию сепарационным диском, чтобы избежать возможных мест разрыва.

#### Примечание:

- Работайте только с подходящими шлифовальными инструментами (специальными инструментами для стеклокерамики или мелкозернистыми алмазными инструментами) и избегайте перегрева стеклокерамики.
- Пресс-канал отделить тонким алмазным диском с низким давлением и при постоянном увлажнении на максимально возможном расстоянии от объекта, чтобы избежать возможного растрескивания.
- Удалить дистанционный лак с культи на модели, осторожно припасовать реставрацию и обработать.

- Проверьте аппроксимальные/окклюзионные контактные точки и при необходимости пришлифуйте.
- Место отреза пресс-канала осторожно обработать.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Неподходящие шлифовальные инструменты и высокое давление могут привести к локальному перегреву или сколу кромки.
- Окончательная обработка должна быть сведена к минимуму.
- Не разъединяйте соединители мостов с помощью режущего диска, так как из-за этого возникают места разрыва.
- Выполняя корректировки необходимо следить за минимально допустимой толщиной стенок.

#### 4.8 Термообработка

Примечание:

- После обработки и припасовки реставрации можно выполнять термообработку.
- Это приводит к поверхностному сглаживанию обработанной реставрации, а также способствует увеличению прочности.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:


- После термообработки не следует повторно отпескоструивать реставрацию, так как в противном случае прочность снова уменьшится.
- Во время длительного охлаждения камера обжига должна оставаться закрытой.

#### 5. Раскрашивание/полировка


##### 5.1 Рабочий процесс для монолитных реставраций




## Рабочие этапы в клинике и лаборатории

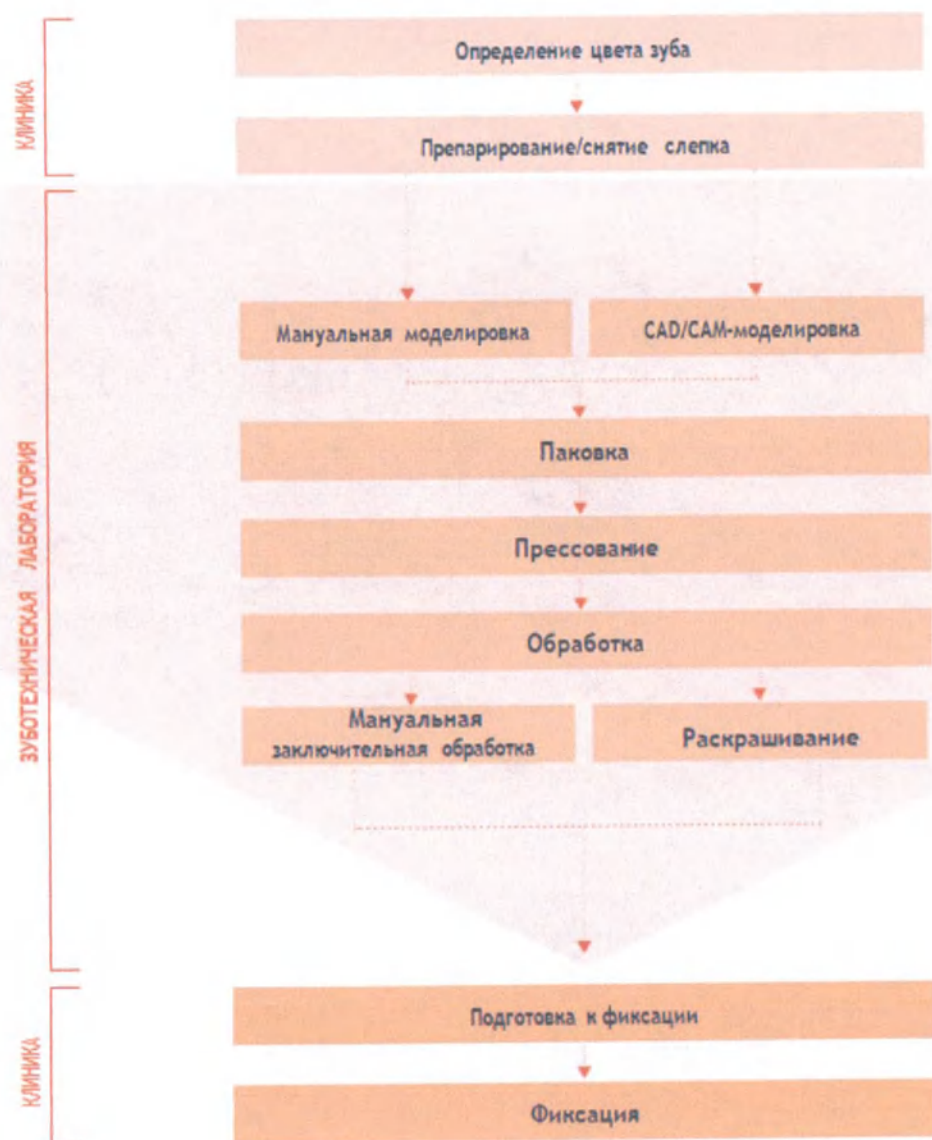


### 5.2 Мануальная заключительная обработка

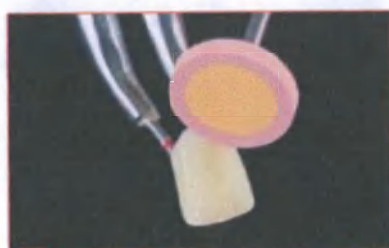

1 Предварительная полировка с помощью грубого полировального диска.

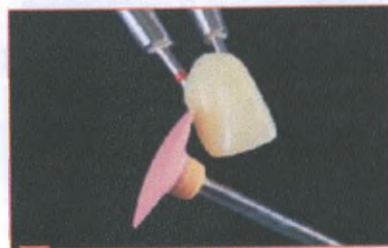

2 Предварительная полировка с помощью грубой полировальной линзы.

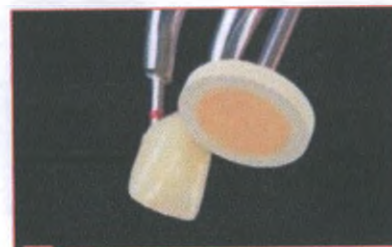

3 Полировка до зеркального блеска с помощью специального полировального диска.



4 Дополнительно можно повысить степень блеска с помощью полировочной пасты.



5 Очистить с помощью ультразвука.



6 Окончательно отполированная реставрация.

#### Примечание:

- Предварительная полировка осуществляется розовыми алмазными инструментами VITA SUPRINITY со скоростью 7.000 – 12.000 об./мин.
- Окончательная полировка осуществляется серыми алмазными инструментами VITA SUPRINITY со скоростью 4.000 – 8.000 об./мин.

#### Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Как при предварительной, так и при окончательной обработке не допускать перегрева!
- Следует также обращать внимание на низкое и равномерное контактное давление.
- Для повышения прочности можно предварительно провести компенсационный обжиг.

#### Рекомендация:

- Еще более высокая степень блеска может быть достигнута с помощью алмазной полировальной пасты VITA KARAT (только для экстраорального применения).

#### 5.3 Техника раскрашивания



1 Реставрации придать шероховатость и основательно очистить от пыли.



2 Обработанная коронка на модели.



3 Нанесение глазури.




4 помощью красителей выполнить характеризацию реставрации буккально и окклюзионно.



5 – okklusalen Bereich charakterisieren.



6 Готовая реставрация после обжига.

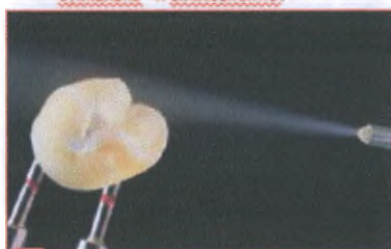

7 качестве альтернативы можно использовать низкотемпературную глазури в виде спрея.

#### Примечание:

- Для характеристики предлагаются красители/глазурировочные массы VITA AKZENT Plus.
- Перед началом раскрашивания очистите прессованные реставрации с помощью пароструи, чтобы устранить остатки жира или грязи.
- Для более насыщенного цвета нанесите краситель повторно, вместо того, чтобы наносить один толстый слой.
- Для хорошей покрываемости окрашенные поверхности можно смачивать жидкостью VITA AKZENT Plus Fluid.

#### Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Реставрации из VITA AMBRIA® и VITA LUMEX® AC должны быть покрыты с помощью VITA AKZENT Plus GLAZE LT (порошок, спрей).
- Слишком тонкий слой глазури приводит к недостаточному блеску. Следует избегать нанесения слишком толстого слоя и образования подтёков.
- При использовании аэрозоля распыляйте глазури равномерно на расстоянии от 10 до 15 см и периодически нажимайте на клапан.



- Внутренние поверхности реставрации нельзя опрыскивать глазурью.
- Для повышения прочности можно предварительно провести компенсационный обжиг.

#### 5.4 Рекомендации по характеристике и покрытию глазурью

Примечание:

- Характеризация с помощью красителей

Красители VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS (например, ES10, ES11, ES12, ES13) могут использоваться для дополнительной имитации режущего края и транслюценции в инцизальной и окклюзионной области. Для индивидуальной характеристики бугров и фиссур можно использовать красители VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES05-ES07. Для получения более интенсивного цвета в области тела предлагаются красители VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS.

- Обжиг глазури с помощью глазуровочных масс

Обжиг глазури может проводиться с помощью порошковых, пастообразных или спрей-масс. Для увеличения флуоресценции предлагается спрей VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT.


Для создания аппроксимальных контактов может использоваться VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT.

Глазурь на внутренних поверхностях реставрации обязательно нужно удалить с помощью кисти перед обжигом.

#### 6. Техника послойного построения

##### 6.1 Рабочий процесс для частично облицованных реставраций

## Рабочие этапы в клинике и лаборатории

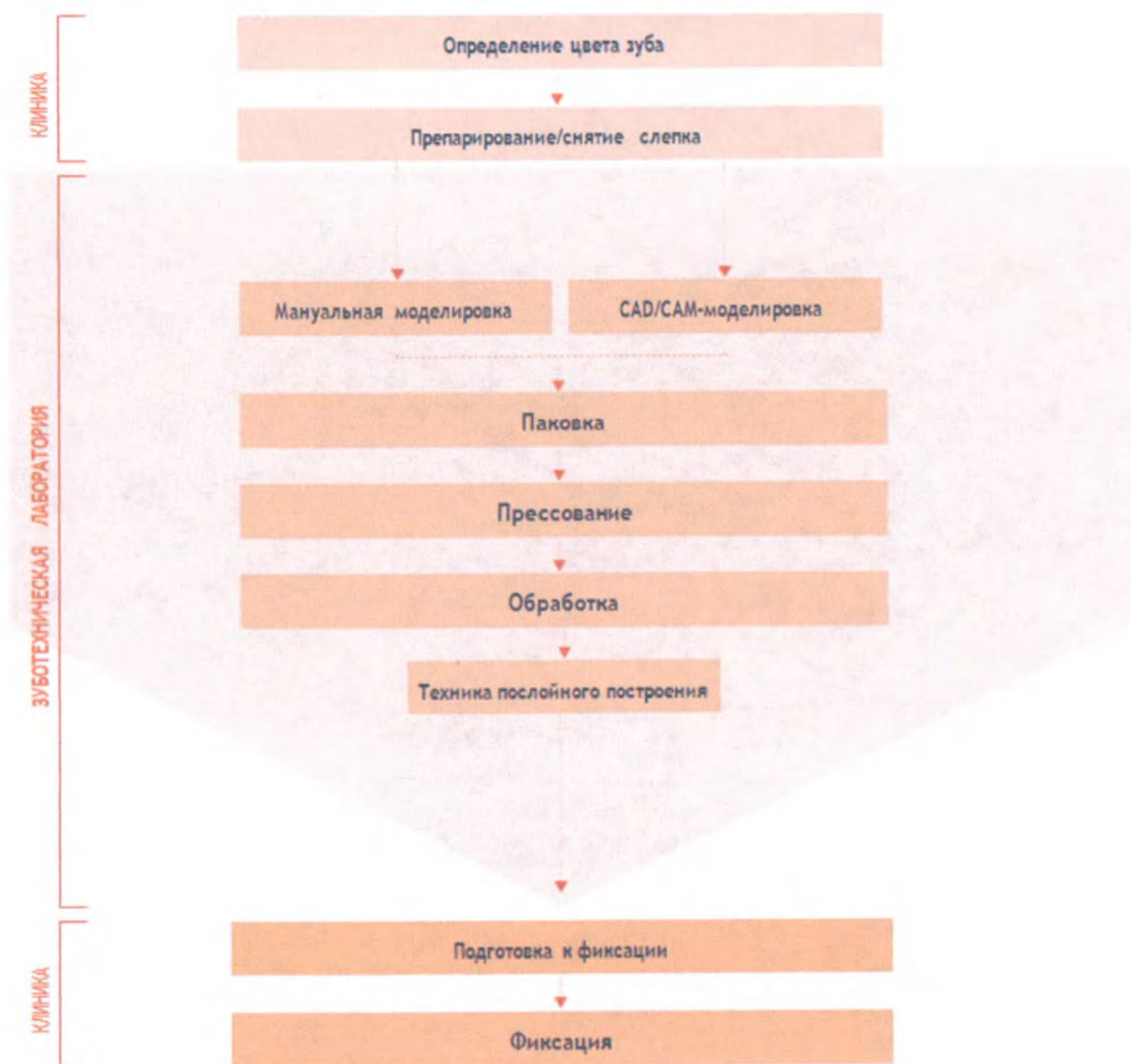

Примечание:

- Рабочий процесс для частично облицованных реставраций (Cut-back) из пресс-заготовок VITA AMBRIA.

### 6.2 Техника Cut-Back и частичная облицовка: на примере мостовидной конструкции



1 Очищенная реставрация.



2 Дополнение формы с помощью эмалевых и транслюцентных масс VITA LUMEX AC.



3 Реставрация после первого обжига.



4 При необходимости внесите корректировки в форму и снова выполните обжиг.



5 Готовая реставрация после 2 обжига.



6 Готовая реставрация после обжига глазури.


### 6.3 Техника Cut-Back и частичная облицовка: на примере винира




1 Реставрацию после процесса прессования припасовать, обрабатывать и редуцировать.



Дополнение формы с помощью эмалевых и транслюцентных масс VITA LUMEX AC.

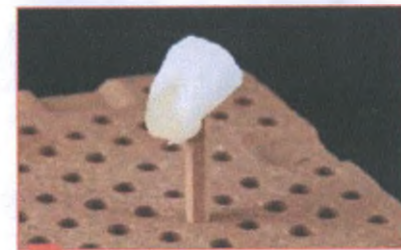

3 Зафиксировать винир с помощью VITA Firing Paste на обжиговом трепере.

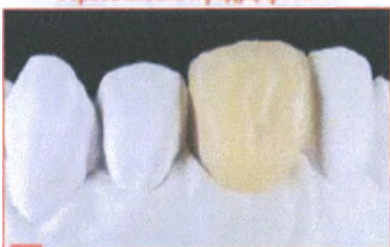

4 Винир после первого обжига.



5 Готовая реставрация после окончательной полировки.

#### Примечание:

- При технике срезания Cut-Back уменьшенная шлифованная реставрация из VITA AMBRIA в инцизальной и окклюзионной области облицовывается транслюцентными и режущими массами VITA LUMEX® AC.
  - Снова завершить анатомическую форму с помощью VITA LUMEX® AC.
- Пожалуйста, соблюдайте следующее:
- При дополнении Cut-back с VITA LUMEX® AC нет необходимости в обжиге водянистого обжига.



- Для смешивания масс VITA LUMEX® AC рекомендуется использовать жидкость VITA LUMEX AC.

- Для повышения прочности можно предварительно провести компенсационный обжиг.

## 7. Воспроизведение цвета/обжиг

### 7.1 Воспроизведение цвета с помощью техники раскрашивания

| Характеристики полной анатомической реставрации с помощью VITA AKZENT PLUS |               |               |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Цвет зуба                                                                  | Цвет таблетки | CHROMA STAINS | EFFECT STAINS                        |
| 0M1                                                                        | 0M1           | –             | Индивидуальное применение: ES01–ES07 |
| 0M2                                                                        | 0M1           | –             |                                      |
| 0M3                                                                        | 0M3           | –             |                                      |
| A1                                                                         | A1            | –             | Режущий край: ES10, ES11, ES12, ES13 |
| A2                                                                         | A2            | –             |                                      |
| A3                                                                         | A3            | –             |                                      |
| A3.5                                                                       | A3            | CS A          |                                      |
| A4                                                                         | A3            | CS A          |                                      |
| B1                                                                         | B1            | –             |                                      |
| B2                                                                         | B2            | –             |                                      |
| B3                                                                         | B2            | CS B          |                                      |
| B4                                                                         | B2            | CS B          |                                      |
| C1                                                                         | A1            | CS C          |                                      |
| C2                                                                         | C2            | –             |                                      |
| C3                                                                         | C2            | CS C          |                                      |
| C4                                                                         | C2            | CS C          |                                      |
| D2                                                                         | D2            | –             |                                      |
| D3                                                                         | D2            | CS D          |                                      |
| D4                                                                         | D2            | CS D          |                                      |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики полной анатомической реставрации с помощью VITA AKZENT PLUS |
|----------------------------------------------------------------------------|

| Цвет<br>зуба | Цвет<br>таблетки | VITA LUMEX<br>AC<br>эмалевые<br>массы | VITA LUMEX AC<br>Translucent- массы                                                                                                                                                                                                      | CHROMA<br>STAINS | EFFECT STAINS                                                            |
|--------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0M1          | 0M1              | light                                 | Индивидуальное<br>применение:<br><br>OPAL<br>TRANSLUCENT: opal<br>neutral, opal sky, opal<br>azure<br><br>TRANSLUCENT:<br>smoky white, light<br>blonde, misty rose,<br>sunlight, sun intense,<br><br>deep blue, waterdrop,<br>forry grey | —                | Индивидуальное<br>применение: EFFECT<br>STAINS ES01– ES07                |
| 0M2          | 0M1              | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| 0M3          | 0M3              | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| A1           | A1               | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| A2           | A2               | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| A3           | A3               | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| A3.5         | A3               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS A             | Индивидуальное<br>применение: EFFECT<br>STAINS ES10, ES11,<br>ES12, ES13 |
| A4           | A3               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS A             |                                                                          |
| B1           | B1               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| B2           | B2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| B3           | B2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS B             |                                                                          |
| B4           | B2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS B             |                                                                          |
| C1           | A1               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS C             |                                                                          |
| C2           | C2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| C3           | C2               | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | CS C             |                                                                          |
| C4           | C2               | light                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | CS C             |                                                                          |
| D2           | D2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | —                |                                                                          |
| D3           | D2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS D             |                                                                          |
| D4           | D2               | medium                                |                                                                                                                                                                                                                                          | CS D             |                                                                          |

### 7.3 Параметры прессования



#### 7.4 Термообработка





Примечание:

- Это приводит к поверхностному сглаживанию обработанной реставрации, а также способствует увеличению прочности (550 МПа).

#### 7.5 Обжиг красителей

| Параметры обжига при технике раскрашивания VITA AKZENT Plus             |        |           |                 |           |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| VITA VACUMAT 6000 M                                                     | Vt. °C | →<br>мин. | ок. Темп.<br>°C | →<br>мин. | VAC<br>мин. | →<br>°C |
| Обжиг красителей                                                        | 400    | 4.00      | 700             | 1.00      | —           | —       |
| Глянцобразующий обжиг                                                   | 400    | 0.00      | 750             | 1.00      | —           | 500*    |
| Глянцобразующий обжиг красителей VITA AKZENT Plus GLAZE LT Pulver/Spray | 400    | 4.00      | 750             | 1.00      | —           | 500*    |

#### 7.6 Обжиг для техники послойного построения

| Параметры обжига для частичной облицовки с помощью VITA LUMEX AC |
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|

| VITA VACUMAT<br>6000 M                                                  | Vt. °C | →<br>мин. | ок. Темп.<br>C | →<br>мин. | VAC<br>мин. | →<br>°C |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 1-й обжиг дентина                                                       | 400    | 6.00      | 760            | 1.00      | 7.16        | –       |
| 2-й обжиг дентина                                                       | 400    | 6.00      | 755            | 1.00      | 7.16        | 500*    |
| Обжиг красителей                                                        | 400    | 4.00      | 700            | 1.00      | –           | –       |
| Глянцобразующий обжиг                                                   | 400    | 4.00      | 750            | 1.00      | –           | 500*    |
| Глянцобразующий обжиг красителей VITA AKZENT Plus GLAZE LT Pulver/Spray | 400    | 6.00      | 750            | 1.00      | –           | 500*    |

\*) Этап продолжительного охлаждения до определенной температуры рекомендуется при проведении последнего обжига керамики. Положение лифта печи VITA VACUMAT 6000 M > 75%. В помещении, где проводится обжиг, не должно быть сквозняков.

#### 7.7 Рекомендации для обжига

Примечание:

- Использование керамических трегеров и штифтов не рекомендуется, поскольку реставрации могут прилипнуть к ним.
- Если же они используются, рекомендуется покрыть их платиновой фольгой или небольшим количеством пасты для обжига VITA, чтобы избежать прямого контакта с реставрацией.
- Если используются другие и не прошедшие испытания печи для обжига, необходимо учесть следующее: печи должны иметь функцию контролируемого длительного охлаждения и вакуума.

перед первым обжигом материала VITA AMBRIA необходимо провести калибровку печи. Обратите внимание на точное выполнение указаний производителя при калибровке.

- После обжига реставрации из VITA AMBRIA убрать с обжигового трегера и во время остывания при комнатной температуре не допускать сквозняков. Не касаться неостывших реставраций металлическими щипцами, нельзя также обдувать или погружать в холодную воду.

Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Для обжига рекомендуется использовать сотовый трегер и платиновые штифты.
- Приведенные в этой рабочей инструкции параметры обжига согласованы с программами печей для обжига VITA VACUMAT (оптимальная настройка для серии VITA VACUMAT 6000).
- Если используется печь для обжига керамики другой фирмы, может понадобиться температурная адаптация (от +/- 5 C до макс. +/- 10 C ).

Рекомендация:

- Чтобы избежать чрезмерного или недостаточного обжига, температуру обжига следует регулярно проверять

## 6. Техническая спецификация

Материалы, применяемые в изделии, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.-Материалы, применяемые в изделии

### 1. VITA LUMEX® AC

| Материал                                                                   | Производитель                                          | Содержание |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Кремния диоксид CAS-№ (номер в паспорте безопасности вещества)* 14808-60-7 | VITA<br>Zahnfabrik<br>H. Rauter<br>&<br>GmbH<br>Co. KG | 60 - 75    |
| оксид калия CAS-№ 12136-45-7                                               |                                                        | 5 - 12     |
| борный ангидрид CAS-№ 1303-86-2                                            |                                                        | 5 - 12     |
| оксид натрия CAS-№ 1313-59-3                                               |                                                        | 4 - 11     |
| оксид алюминия CAS-№ 1344-28-1                                             |                                                        | 3 - 10     |
| оксид лития CAS-№ 12057-24-8                                               |                                                        | < 3        |
| кальция оксид CAS-№ 1305-78-8                                              |                                                        | < 3        |
| диоксид циркония CAS-№ 1314-23-4                                           |                                                        | < 2        |
| оксид бария CAS-№ 1304-29-6                                                |                                                        | < 1        |
| оловянный ангидрид CAS-№ 18282-10-5                                        |                                                        | < 1        |
| диоксид титана CAS-№ 13463-67-7                                            |                                                        | < 2        |
| оксид церия (IV) CAS-№ 1306-38-3                                           |                                                        | < 1        |
| оксид магния CAS-№ 1309-48-4                                               |                                                        | < 1        |
| оксид железа (III) CAS-№ 1309-37-1                                         |                                                        | < 1        |
| пентоксид фосфора CAS-№ 1314-56-3                                          |                                                        | < 1        |

Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC



| Материал                                                                     | Производитель | Содержание  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| вода очищенная CAS-№ 7732-18-5                                               |               | 98.6 – 99.3 |
| неорганические компоненты (неорганические соли, содержащие литий и стронций) | Merck<br>КГаА | 0.6 - 1     |
| органические компоненты (поливалентный спирт)                                | Merck<br>КГаА | 0.1 – 0.4   |

| VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE (Классические оттенки) |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Компонент                                            | SiO2      | Al2O3     | BaO       | CaO       | CeO2      | Co 203    | Cr2O3     | Fe3O3     | K2O        | Li 2O      | MgO       | Mn2O3     | Na2O      | P4O10     | ZnO2       | TiO2       | ZrO2      | B2O3      |           |
| Регистрационный номер CAS                            | 7631-86-9 | 1344-28-1 | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3 | 1308-04-9 | 1308-38-9 | 1309-37-1 | 12136-45-7 | 12057-24-8 | 1309-48-4 | 1309-64-4 | 1313-59-3 | 1314-56-3 | 18282-10-5 | 13463-67-7 | 1314-23-4 | 1303-86-2 |           |
| Состав (%)                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A1                     | 67,800    | 6,500     | 0,100     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,500      | 0,644      | 0,050     | 0,000     | 6,000     | 0,100     | 0,000      | 0,149      | 0,839     | 7,120     |           |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A2                     | 68,500    | 6,300     | 0,097     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,146     | 8,300      | 0,622      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,146      | 0,800     | 7,130     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A3                     | 68,301    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,147     | 8,200      | 0,626      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,147      | 0,663     | 7,140     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A3.5                   | 68,303    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,147     | 8,200      | 0,628      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,147      | 0,663     | 7,120     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A4                     | 68,308    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,148     | 8,200      | 0,621      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,148      | 0,663     | 7,130     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B1                     | 68,302    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,154     | 8,200      | 0,624      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,154      | 0,663     | 7,102     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B2                     | 68,304    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,151     | 8,200      | 0,623      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,151      | 0,663     | 7,104     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B3                     | 68,300    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,200      | 0,622      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,149      | 0,663     | 7,110     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B4                     | 68,303    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,200      | 0,621      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,148      | 0,663     | 7,103     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C1                     | 68,302    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,148     | 8,200      | 0,628      | 0,050     | 0,000     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,148      | 0,663     | 7,104     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C2                     | 68,301    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,154     | 8,200      | 0,624      | 0,050     | 0,001     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,154      | 0,663     | 7,105     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C3                     | 68,304    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,151     | 8,200      | 0,627      | 0,050     | 0,002     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,151      | 0,663     | 7,108     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C4                     | 68,302    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,200      | 0,622      | 0,050     | 0,003     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,149      | 0,663     | 7,109     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, D2                     | 68,306    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,001     | 0,146     | 8,200      | 0,621      | 0,050     | 0,004     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,146      | 0,663     | 7,112     | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, D3                     | 68,400    | 6,600     | 0,098     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,001     | 0,137     | 8,200      | 0,623      | 0,050     | 0,004     | 5,900     | 0,100     | 0,000      | 0,137      | 0,663     | 7,113     | 100       |

|                                        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, D4 | 68,400 | 6,600 | 0,098 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,127 | 8,200 | 0,621 | 0,050 | 0,006 | 5,900 | 0,100 | 0,000 | 0,127 | 0,663 | 7,100 | 100 |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|

| VITA LUMEX® AC DENTINE (Классические оттенки) |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Компонент                                     | SiO2      | Al2O3     | BaO       | CaO       | CeO2      | Co 20 3   | Cr2O3     | Fe3O3     | K2O        | Li 2O      | MgO       | Mn2O3     | Na2O      | P4O10     | ZnO2       | TiO2       | ZrO2      | B2O3      |           |
| Регистрационный номер CAS                     | 7631-86-9 | 1344-28-1 | 1304-28-5 | 1305-78-9 | 1306-38-3 | 1308-04-9 | 1308-38-9 | 1309-37-1 | 12136-45-7 | 12057-24-6 | 1309-48-4 | 1309-64-4 | 1313-59-3 | 1314-56-3 | 18282-10-5 | 13463-67-7 | 1314-23-4 | 1303-86-2 |           |
| Состав (%)                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           |           |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>A1               | 68,001    | 6,400     | 0,102     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,500      | 0,672      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,149      | 0,470     | 7,100     | 100       |
| VITA AC<br>OPAQUE<br>DENTINE, A2              | 68,110    | 6,400     | 0,102     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,146     | 8,300      | 0,672      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,146      | 0,470     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>A3               | 68,002    | 6,640     | 0,102     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,147     | 8,500      | 0,672      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,147      | 0,470     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>A3.5             | 67,911    | 6,600     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,147     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,147      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>A4               | 67,912    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,148     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,148      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>B1               | 67,902    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,154     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,154      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>B2               | 67,903    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,151     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,151      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>B3               | 67,900    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,149      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>B4               | 67,913    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,146     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,146      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>C1               | 67,902    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,148     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,148      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>C2               | 67,112    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,154     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,154      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>C3               | 67,914    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,151     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,151      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>C4               | 67,914    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,149     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,149      | 0,489     | 7,100     | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>D2               | 67,901    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,000     | 0,000     | 0,001     | 0,146     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,146      | 0,489     | 7,100     | 100       |



|                                 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>D3 | 68,012 | 6,700 | 0,101 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,137 | 8,300 | 0,652 | 0,050 | 0,000 | 6,200 | 0,100 | 0,000 | 0,137 | 0,489 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>D4 | 68,002 | 6,700 | 0,101 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,127 | 8,300 | 0,652 | 0,050 | 0,000 | 6,200 | 0,100 | 0,000 | 0,127 | 0,489 | 7,100 | 100 |

| VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE (3D Master)     |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Bcero<br>(%) |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Компонент                                     | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |              |
| Регистрационный<br>номер CAS                  | 7631-86-<br>9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |              |
| Состав (%)                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |              |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM1       | 65,801        | 7,850         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM2       | 65,802        | 7,850         | 0,100         | 2,010         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,049         | 0,000         | 6,400         | 0,001         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM3       | 65,812        | 7,850         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 1M1       | 65,813        | 7,850         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,003         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,350          | 0,900         | 7,500         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 1M2       | 65,814        | 7,853         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,400          | 0,900         | 7,500         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M1       | 65,811        | 7,856         | 0,100         | 2,010         | 0,000         | 0,000         | 0,003         | 0,049         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,001         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M2       | 66,801        | 7,869         | 0,100         | 2,010         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,049         | 0,000         | 6,400         | 0,001         | 0,010          | 0,340          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M3       | 65,802        | 7,862         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2L1.5     | 65,803        | 7,865         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,350          | 0,900         | 7,600         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE,<br>2L 2.5 | 65,804        | 7,868         | 0,100         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,010          | 0,350          | 0,900         | 7,500         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2R1.5     | 65,804        | 7,871         | 0,100         | 2,010         | 0,000         | 0,000         | 0,004         | 0,049         | 8,487          | 0,500          | 0,050         | 0,000         | 6,400         | 0,001         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2R2.5     | 65,811        | 7,874         | 0,100         | 2,010         | 0,000         | 0,000         | 0,003         | 0,050         | 8,487          | 0,500          | 0,049         | 0,000         | 6,400         | 0,002         | 0,010          | 0,350          | 0,950         | 7,450         | 100          |

|                                              |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M1      | 65,803 | 7,877 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M2      | 65,804 | 7,880 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,340 | 0,900 | 7,500 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M3      | 65,803 | 7,883 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,900 | 7,500 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE,<br>3R1.5 | 65,807 | 7,886 | 0,100 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,049 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,001 | 0,010 | 0,350 | 0,900 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3R2.5    | 65,807 | 7,889 | 0,100 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,049 | 0,000 | 6,400 | 0,001 | 0,010 | 0,350 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3L1.5    | 65,813 | 7,892 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3L2.5    | 65,814 | 7,895 | 0,100 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,049 | 0,000 | 6,400 | 0,001 | 0,010 | 0,350 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M1      | 65,819 | 7,898 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,900 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M2      | 65,822 | 7,901 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,400 | 0,900 | 7,500 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M3      | 65,819 | 7,904 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,900 | 7,500 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4L1.5    | 65,811 | 7,907 | 0,100 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,049 | 0,000 | 6,400 | 0,001 | 0,010 | 0,350 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4L2.5    | 65,802 | 7,910 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4R1.5    | 65,801 | 7,913 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,350 | 0,900 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4R2.5    | 65,811 | 7,916 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,00  | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,500 | 0,900 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M1      | 36,809 | 7,919 | 0,100 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,049 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,001 | 0,010 | 0,500 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M2      | 65,802 | 7,922 | 0,100 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,049 | 0,000 | 6,400 | 0,001 | 0,010 | 0,500 | 0,950 | 7,450 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M3      | 66,801 | 7,925 | 0,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,050 | 8,487 | 0,500 | 0,050 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 0,500 | 0,950 | 7,450 | 100 |



| VITA LUMEX® AC DENTINE (3D Master) |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Всего (%) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Компонент                          | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |           |
| Регистрационный<br>номер CAS       | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |           |
| Состав (%)                         |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Всего (%) |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>OM1   | 65,400        | 7,700         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,200          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,200         | 0,000         | 0,000          | 0,501          | 0,330         | 7,400         |           |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>OM2   | 65,350        | 7,700         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,200          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,200         | 0,000         | 0,000          | 0,500          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>OM3   | 65,404        | 7,701         | 2,000         | 2,000         | 0,001         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,200          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,200         | 0,000         | 0,000          | 0,503          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>1M1   | 65,404        | 7,701         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,051         | 8,200          | 0,510          | 0,041         | 0,000         | 6,201         | 0,000         | 0,000          | 0,500          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>1M2   | 65,407        | 7,701         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,200          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,200         | 0,001         | 0,000          | 0,502          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2M1   | 65,408        | 7,702         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,200          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,200         | 0,000         | 0,000          | 0,500          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2M2   | 65,400        | 7,702         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,200          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,200         | 0,000         | 0,000          | 0,504          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2M3   | 65,302        | 7,703         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,001         | 0,050         | 8,400          | 0,450          | 0,040         | 0,001         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,420          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2L1.5 | 65,301        | 7,703         | 2,000         | 2,001         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,049         | 8,350          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,400          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2L2.5 | 65,304        | 7,703         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,400          | 0,500          | 0,041         | 0,000         | 6,410         | 0,000         | 0,000          | 0,340          | 0,330         | 7,410         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2R1.5 | 65,307        | 7,704         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,400          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,340          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>2R2.5 | 65,321        | 7,600         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,400          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,340          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3M1   | 65,311        | 7,710         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,001         | 0,000         | 0,050         | 8,350          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,341          | 0,330         | 7,400         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3M2   | 65,302        | 7,720         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,400          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,340          | 0,330         | 7,410         | 100       |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3M3   | 65,302        | 7,700         | 2,000         | 2,000         | 0,000         | 0,000         | 0,001         | 0,050         | 8,400          | 0,500          | 0,040         | 0,000         | 6,400         | 0,000         | 0,000          | 0,342          | 0,330         | 7,400         | 100       |



|                                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3R1.5 | 65,301 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,350 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3R2.5 | 65,302 | 7,701 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,041 | 0,000 | 6,410 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,410 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3L1.5 | 65,300 | 7,701 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>3L2.5 | 65,311 | 7,701 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4M1   | 65,312 | 7,702 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4M2   | 65,315 | 7,702 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4M3   | 65,318 | 7,703 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4L1.5 | 65,320 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4L2.5 | 65,311 | 7,710 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,050 | 8,350 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,341 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4R1.5 | 65,312 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,410 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>4R2.5 | 65,318 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>5M1   | 65,311 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,350 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>5M2   | 65,317 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,041 | 0,000 | 6,410 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,410 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE,<br>5M3   | 65,313 | 7,700 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 8,400 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,330 | 7,400 | 100 |

| VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT   |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Всего (%) |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Компонент                    | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |           |
| Регистрационный<br>номер CAS | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |           |
| Состав (%)                   |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Всего (%) |
| VITA LUMEX<br>AC             | 66,600        | 7,400         | 0,104         | 2,100         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 8,600          | 0,680          | 0,050         | 0,000         | 6,800         | 0,100         | 0,020          | 0,315          | 0,110         | 7,100         |           |

|                                                  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| TRANSLUCENT<br>smoky white                       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| VITA LUMEX<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>light blonde, | 66,700 | 7,400 | -     | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,000 | 6,800 | 0,100 | 0,001 | 0,235 | 0,110 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC,<br>TRANSLUCENT<br>misty rose   | 66,702 | 7,400 | 0,104 | 2,100 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,052 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,000 | 6,800 | 0,100 | 0,000 | 0,225 | 0,100 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>sunlight      | 66,704 | 7,400 | 0,104 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,000 | 6,800 | 0,100 | 0,000 | 0,257 | 0,110 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>sun intense   | 66,708 | 7,400 | 0,104 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,001 | 6,800 | 0,100 | 0,000 | 0,215 | 0,110 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>waterdrop     | 66,800 | 7,400 | 0,104 | 2,100 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,000 | 6,800 | 0,100 | 0,000 | 0,216 | 0,110 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>deep blue     | 66,812 | 7,400 | 0,104 | 2,100 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,000 | 6,800 | 0,100 | 0,000 | 0,216 | 0,110 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>foggy grey,   | 66,717 | 7,400 | 0,104 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 8,600 | 0,680 | 0,050 | 0,002 | 6,800 | 0,100 | 0,000 | 0,215 | 0,110 | 7,100 | 100 |

| VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER                       |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |     |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| Компонент                                             | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |     |
| Регистрационный<br>номер CAS                          | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |     |
| Состав (%)                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |     |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE<br>MODIFIER,<br>cloudy-white | 68,106        | 6,400         | 0,102         | 2,200         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 8,600          | 0,672          | 0,050         | 0,000         | 6,200         | 0,100         | 0,000          | 0,154          | 0,470         | 7,100         | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE<br>MODIFIER,<br>caramel      | 68,104        | 6,400         | 0,102         | 2,200         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,051         | 8,500          | 0,672          | 0,050         | 0,000         | 6,200         | 0,100         | 0,000          | 0,164          | 0,470         | 7,100         | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC, DENTINE<br>MODIFIER,<br>honey       | 68,103        | 6,400         | 0,102         | 2,200         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,052         | 8,500          | 0,672          | 0,050         | 0,000         | 6,200         | 0,100         | 0,000          | 0,154          | 0,470         | 7,100         | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE                              | 68,102        | 6,400         | 0,102         | 2,200         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,053         | 8,500          | 0,672          | 0,050         | 0,000         | 6,200         | 0,100         | 0,010          | 0,154          | 0,470         | 7,100         | 100 |



|                                                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| MODIFIER,<br>copper                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| VITA LUMEX<br>AC DENTINE<br>MODIFIER,<br>brown | 68,112 | 6,400 | 0,102 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 8,500 | 0,672 | 0,050 | 0,000 | 6,200 | 0,100 | 0,000 | 0,154 | 0,470 | 7,100 | 100 |

| VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE                       |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Компонент                                         | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |              |
| Регистрационный<br>номер CAS                      | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |              |
| Состав (%)                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Bcero<br>(%) |
| VITA LUMEX<br>AC FLUO<br>INTENSE, arctic<br>white | 66,603        | 6,900         | 0,099         | 2,100         | 0,035         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 8,500          | 0,637          | 0,050         | 0,000         | 6,500         | 0,100         | 0,000          | 0,150          | 1,351         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC FLUO<br>INTENSE, cream           | 66,600        | 6,900         | 0,099         | 2,100         | 0,035         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,600          | 0,637          | 0,050         | 0,000         | 6,500         | 0,100         | 0,000          | 0,160          | 1,361         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC, FLUO<br>INTENSE,<br>cappuccino  | 66,612        | 6,900         | 0,099         | 2,100         | 0,035         | 0,000         | 0,000         | 0,052         | 8,500          | 0,637          | 0,050         | 0,010         | 6,500         | 0,100         | 0,020          | 0,160          | 1,200         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC FLUO<br>INTENSE, sand            | 66,503        | 6,900         | 0,099         | 2,100         | 0,035         | 0,000         | 0,000         | 0,053         | 8,500          | 0,637          | 0,050         | 0,000         | 6,500         | 0,100         | 0,010          | 0,160          | 1,400         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC FLUO<br>INTENSE,<br>sesame       | 66,400        | 6,900         | 0,099         | 2,100         | 0,035         | 0,000         | 0,000         | 0,053         | 8,500          | 0,637          | 0,050         | 0,000         | 6,500         | 0,100         | 0,010          | 0,150          | 1,500         | 7,100         | 100          |

| VITA LUMEX® AC PEARL          |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Компонент                     | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |              |
| Регистрационный<br>номер CAS  | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |              |
| Состав (%)                    |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Bcero<br>(%) |
| VITA LUMEX<br>AC PEARL, shell | 67,800        | 7,000         | 0,103         | 2,100         | 0,025         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 8,200          | 0,678          | 0,050         | 0,000         | 6,500         | 0,100         | 0,000          | 0,337          | 0,040         | 7,100         | 100          |

| VITA LUMEX® AC MAMELON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| Компонент                          | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | BaO       | CaO       | CeO <sub>2</sub> | Co 20<br>3 | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | K <sub>2</sub> O | Li <sub>2</sub> O | MgO       | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Na <sub>2</sub> O | P <sub>4</sub> O <sub>10</sub> | ZnO        | TiO <sub>2</sub> | ZrO <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |           |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| Регистрационный номер CAS          | 7631-86-9        | 1344-28-1                      | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3        | 1308-04-9  | 1308-38-9                      | 1309-37-1                      | 12136-45-7       | 12057-24-8        | 1309-48-4 | 1309-64-4                      | 1313-59-3         | 1314-56-3                      | 18282-10-5 | 13463-67-7       | 1314-23-4        | 1303-86-2                     |           |
| Состав (%)                         |                  |                                |           |           |                  |            |                                |                                |                  |                   |           |                                |                   |                                |            |                  |                  |                               | Beero (%) |
| VITA LUMEX AC MAMELON, saffron     | 67,600           | 6,500                          | 0,097     | 2,100     | 0,030            | 0,000      | 0,000                          | 0,049                          | 8,200            | 0,614             | 0,050     | 0,000                          | 6,300             | 0,100                          | 0,000      | 0,146            | 1,177            | 7,100                         | 100       |
| VITA LUMEX AC MAMELON, honey melon | 67,600           | 6,600                          | 0,097     | 2,100     | 0,030            | 0,000      | 0,000                          | 0,049                          | 8,200            | 0,614             | 0,050     | 0,000                          | 6,300             | 0,100                          | 0,000      | 0,146            | 1,150            | 7,100                         | 100       |

| VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT             |                  |                                |           |           |                  |            |                                |                                |                  |                   |           |                                |                   |                                |            |                  |                  |                               |           |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| Компонент                                   | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | BaO       | CaO       | CeO <sub>2</sub> | Co 20<br>3 | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | K <sub>2</sub> O | Li <sub>2</sub> O | MgO       | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Na <sub>2</sub> O | P <sub>4</sub> O <sub>10</sub> | ZnO        | TiO <sub>2</sub> | ZrO <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |           |
| Регистрационный номер CAS                   | 7631-86-9        | 1344-28-1                      | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3        | 1308-04-9  | 1308-38-9                      | 1309-37-1                      | 12136-45-7       | 12057-24-8        | 1309-48-4 | 1309-64-4                      | 1313-59-3         | 1314-56-3                      | 18282-10-5 | 13463-67-7       | 1314-23-4        | 1303-86-2                     |           |
| Состав (%)                                  |                  |                                |           |           |                  |            |                                |                                |                  |                   |           |                                |                   |                                |            |                  |                  |                               | Beero (%) |
| VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal neutral | 66,700           | 7,400                          | 0,104     | 2,100     | 0,030            | 0,003      | 0,000                          | 0,049                          | 8,600            | 0,680             | 0,050     | 0,010                          | 6,800             | 0,100                          | 0,000      | 0,215            | 0,110            | 7,100                         | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal sky     | 66,700           | 7,400                          | 0,104     | 2,100     | 0,030            | 0,003      | 0,000                          | 0,049                          | 8,600            | 0,680             | 0,050     | 0,000                          | 6,800             | 0,100                          | 0,000      | 0,215            | 0,100            | 7,100                         | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal azure   | 66,700           | 7,400                          | 0,104     | 2,100     | 0,000            | 0,001      | 0,000                          | 0,049                          | 8,600            | 0,680             | 0,050     | 0,000                          | 6,800             | 0,100                          | 0,000      | 0,100            | 0,110            | 7,100                         | 100       |

| VITA LUMEX® AC ENAMEL       |                  |                                |           |           |                  |            |                                |                                |                  |                   |           |                                |                   |                                |            |                  |                  |                               |           |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| Компонент                   | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | BaO       | CaO       | CeO <sub>2</sub> | Co 20<br>3 | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | K <sub>2</sub> O | Li <sub>2</sub> O | MgO       | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Na <sub>2</sub> O | P <sub>4</sub> O <sub>10</sub> | ZnO        | TiO <sub>2</sub> | ZrO <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |           |
| Регистрационный номер CAS   | 7631-86-9        | 1344-28-1                      | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3        | 1308-04-9  | 1308-38-9                      | 1309-37-1                      | 12136-45-7       | 12057-24-8        | 1309-48-4 | 1309-64-4                      | 1313-59-3         | 1314-56-3                      | 18282-10-5 | 13463-67-7       | 1314-23-4        | 1303-86-2                     |           |
| Состав (%)                  |                  |                                |           |           |                  |            |                                |                                |                  |                   |           |                                |                   |                                |            |                  |                  |                               | Beero (%) |
| VITA LUMEX AC ENAMEL clear  | 66,900           | 7,400                          | 0,104     | 2,100     | 0,000            | 0,000      | 0,000                          | 0,000                          | 8,600            | 0,680             | 0,050     | 0,000                          | 6,800             | 0,100                          | 0,000      | 0,120            | 0,110            | 7,100                         | 100       |
| VITA LUMEX AC ENAMEL light  | 66,800           | 7,400                          | 0,104     | 2,100     | 0,000            | 0,000      | 0,000                          | 0,049                          | 8,600            | 0,680             | 0,050     | 0,000                          | 6,800             | 0,100                          | 0,000      | 0,130            | 0,110            | 7,100                         | 100       |
| VITA LUMEX AC ENAMEL medium | 67,400           | 6,900                          | 0,105     | 2,200     | 0,000            | 0,000      | 0,000                          | 0,050                          | 8,600            | 0,678             | 0,050     | 0,000                          | 6,600             | 0,100                          | 0,000      | 0,140            | 0,133            | 7,100                         | 100       |

|                                    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>intense | 67,401 | 6,900 | 0,105 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 8,600 | 0,677 | 0,050 | 0,000 | 6,600 | 0,100 | 0,000 | 0,150 | 0,133 | 7,100 | 100 |
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>fog     | 67,100 | 7,100 | 0,105 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 8,600 | 0,687 | 0,050 | 0,000 | 6,700 | 0,100 | 0,000 | 0,160 | 0,106 | 7,100 | 100 |

| VITA LUMEX® AC ENAMEL              |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |              |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Компонент                          | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |              |
| Регистрационный<br>номер CAS       | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |              |
| Состав (%)                         |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Всего<br>(%) |
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>clear   | 66,900        | 7,400         | 0,104         | 2,100         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 8,600          | 0,680          | 0,050         | 0,000         | 6,800         | 0,100         | 0,000          | 0,120          | 0,110         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>light   | 66,800        | 7,400         | 0,104         | 2,100         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,049         | 8,600          | 0,680          | 0,050         | 0,000         | 6,800         | 0,100         | 0,000          | 0,130          | 0,110         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>medium  | 67,400        | 6,900         | 0,105         | 2,200         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 8,600          | 0,678          | 0,050         | 0,000         | 6,600         | 0,100         | 0,000          | 0,140          | 0,133         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>intense | 67,401        | 6,900         | 0,105         | 2,200         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,060         | 8,600          | 0,678          | 0,050         | 0,000         | 6,600         | 0,100         | 0,000          | 0,150          | 0,133         | 7,100         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC ENAMEL<br>fog     | 67,100        | 7,100         | 0,105         | 2,100         | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,030         | 8,600          | 0,687          | 0,050         | 0,000         | 6,700         | 0,100         | 0,000          | 0,160          | 0,106         | 7,100         | 100          |

| VITA LUMEX® AC CORRECTIVE                 |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Компонент                                 | SiO2          | Al2O3         | BaO           | CaO           | CeO2          | Co 20<br>3    | Cr2O3         | Fe3O3         | K2O            | Li 2O          | MgO           | Mn2O<br>3     | Na2O          | P4O10         | ZnO2           | TiO2           | ZrO2          | B2O3          |              |
| Регистрационный<br>номер CAS              | 7631-<br>86-9 | 1344-<br>28-1 | 1304-<br>28-5 | 1305-<br>78-8 | 1306-<br>38-3 | 1308-<br>04-9 | 1308-<br>38-9 | 1309-<br>37-1 | 12136<br>-45-7 | 12057<br>-24-8 | 1309-<br>48-4 | 1309-<br>64-4 | 1313-<br>59-3 | 1314-<br>56-3 | 18282<br>-10-5 | 13463<br>-67-7 | 1314-<br>23-4 | 1303-<br>86-2 |              |
| Состав (%)                                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |               |               | Всего<br>(%) |
| VITA LUMEX<br>AC<br>CORRECTIVE<br>neutral | 65,890        | 9,250         | 0,140         | 0,950         | 0,360         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 7,100          | 0,400          | 0,030         | 0,000         | 9,000         | 0,040         | 0,000          | 1,100          | 0,010         | 5,210         | 100          |
| VITA LUMEX<br>AC<br>CORRECTIVE<br>desert  | 65,800        | 9,300         | 0,140         | 0,950         | 0,378         | 0,000         | 0,000         | 0,050         | 7,100          | 0,400          | 0,030         | 0,000         | 9,000         | 0,040         | 0,000          | 1,120          | 0,009         | 5,310         | 100          |



| VITA LUMEX® AC GINGIVA             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Bcer<br>o<br>(%) |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Компонент                          | SiO2      | Al2O3     | BaO       | CaO       | CeO2      | Co 2O3    | Cr2O3     | Fe3O3     | K2O        | Li 2O      | MgO       | Mn2O3     | Na2O      | P4O10     | ZnO2       | TiO2       | ZrO2      | B2O3      |                  |
| Регистрационный номер CAS          | 7631-86-9 | 1344-28-1 | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3 | 1308-04-9 | 1308-38-9 | 1309-37-1 | 12136-45-7 | 12057-24-8 | 1309-48-4 | 1309-64-4 | 1313-59-3 | 1314-56-3 | 18282-10-5 | 13463-67-7 | 1314-23-4 | 1303-86-2 |                  |
| Состав (%)                         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           |                  |
| VITA LUMEX AC GINGIVA light rose   | 66,200    | 7,720     | 0,125     | 2,000     | 0,000     | 0,000     | 0,011     | 0,065     | 8,500      | 0,275      | 0,040     | 0,000     | 6,500     | 0,030     | 0,010      | 0,200      | 0,500     | 7,10      | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA nectarine    | 66,130    | 7,700     | 0,125     | 2,000     | 0,001     | 0,000     | 0,011     | 0,065     | 8,500      | 0,273      | 0,040     | 0,000     | 6,500     | 0,032     | 0,010      | 0,200      | 0,500     | 7,520     | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA grapefruit   | 66,135    | 7,700     | 0,124     | 2,000     | 0,000     | 0,000     | 0,011     | 0,065     | 8,500      | 0,275      | 0,040     | 0,000     | 6,500     | 0,030     | 0,010      | 0,200      | 0,500     | 7,510     | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA rosewood     | 66,400    | 7,700     | 0,125     | 2,000     | 0,000     | 0,001     | 0,011     | 0,065     | 8,500      | 0,274      | 0,040     | 0,001     | 6,500     | 0,030     | 0,010      | 0,220      | 0,500     | 7,510     | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA purple       | 66,120    | 7,700     | 0,12S     | 2,000     | 0,000     | 0,000     | 0,011     | 0,064     | 8,500      | 0,272      | 0,040     | 0,000     | 6,500     | 0,030     | 0,010      | 0,200      | 0,500     | 7,500     | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA deep red     | 66,140    | 7,700     | 0,125     | 2,000     | 0,000     | 0,000     | 0,011     | 0,060     | 8,500      | 0,275      | 0,040     | 0,001     | 6,500     | 0,031     | 0,010      | 0,210      | 0,500     | 7,510     | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA dark red     | 66,120    | 7,700     | 0,125     | 2,000     | 0,000     | 0,000     | 0,011     | 0,065     | 8,500      | 0,274      | 0,040     | 0,000     | 6,500     | 0,030     | 0,010      | 0,210      | 0,500     | 7,500     | 100              |
| VITA LUMEX AC GINGIVA pale papilla | 66,122    | 7,700     | 0,125     | 2,000     | 0,000     | 0,000     | 0,011     | 0,065     | 8,500      | 0,275      | 0,040     | 0,000     | 6,500     | 0,031     | 0,010      | 0,200      | 0,500     | 7,520     | 100              |

| VITA LUMEX® AC OPAQUE         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Компонент                     | SiO2      | Al2O3     | BaO       | CaO       | CeO2      | Co 2O3    | Cr2O3     | Fe3O3     | K2O        | Li 2O      | MgO       | Mn2O3     | Na2O      | P4O10     | ZnO2       | TiO2       | ZrO2      | B2O3      |           |
| Регистрационный номер CAS     | 7631-86-9 | 1344-28-1 | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3 | 1308-04-9 | 1308-38-9 | 1309-37-1 | 12136-45-7 | 12057-24-8 | 1309-48-4 | 1309-64-4 | 1313-59-3 | 1314-56-3 | 18282-10-5 | 13463-67-7 | 1314-23-4 | 1303-86-2 |           |
| Состав (%)                    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | 100       |
| VITA LUMEX AC OPAQUE opaque-0 | 58,030    | 7,630     | 0,255     | 1,580     | 6,500     | 0,000     | 0,000     | 0,020     | 7,201      | 0,310      | 0,030     | 0,000     | 6,000     | 0,030     | 0,010      | 1,260      | 5,120     | 6,000     |           |
| VITA LUMEX AC OPAQUE opaque-1 | 58,041    | 7,630     | 0,255     | 1,580     | 6,500     | 0,000     | 0,000     | 0,020     | 7,212      | 0,310      | 0,030     | 0,000     | 6,000     | 0,030     | 0,010      | 1,260      | 5,120     | 6,000     |           |
| VITA LUMEX AC OPAQUE opaque-2 | 58,112    | 7,630     | 0,255     | 1,580     | 6,500     | 0,000     | 0,000     | 0,020     | 7,203      | 0,310      | 0,030     | 0,000     | 6,000     | 0,030     | 0,010      | 1,260      | 5,120     | 6,000     |           |
| VITA LUMEX AC OPAQUE opaque-3 | 58,017    | 7,630     | 0,255     | 1,580     | 6,500     | 0,000     | 0,000     | 0,020     | 7,204      | 0,310      | 0,030     | 0,000     | 6,000     | 0,030     | 0,010      | 1,260      | 5,120     | 6,000     |           |
| VITA LUMEX AC OPAQUE opaque-4 | 58,013    | 7,630     | 0,255     | 1,580     | 6,500     | 0,000     | 0,000     | 0,020     | 7,203      | 0,310      | 0,030     | 0,000     | 6,000     | 0,030     | 0,010      | 1,260      | 5,120     | 6,000     |           |
| VITA LUMEX AC OPAQUE opaque-5 | 58,012    | 7,630     | 0,255     | 1,580     | 6,500     | 0,000     | 0,000     | 0,020     | 7,205      | 0,310      | 0,030     | 0,000     | 6,000     | 0,030     | 0,010      | 1,260      | 5,120     | 6,000     | 100       |

| VITA LUMEX® AC MARGIN     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Компонент                 | SiO2      | Al2O3     | BaO       | CaO       | CeO2      | Co 2O3    | Cr2O3     | Fe3O3     | K2O        | Li 2O      | MgO       | Mn2O3     | Na2O      | P4O10     | ZnO2       | TiO2       | ZrO2      | B2O3      |           |
| Регистрационный номер CAS | 7631-86-9 | 1344-28-1 | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3 | 1308-04-9 | 1308-38-9 | 1309-37-1 | 12136-45-7 | 12057-24-8 | 1309-48-4 | 1309-64-4 | 1313-59-3 | 1314-56-3 | 18282-10-5 | 13463-67-7 | 1314-23-4 | 1303-86-2 |           |



| Состав (%)                        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Всего (%) |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow | 67,014 | 8,540 | 0,100 | 1,900 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 8,800 | 0,410 | 0,020 | 0,000 | 6,900 | 0,041 | 0,008 | 0,300 | 0,350 | 5,200 | 100       |
| VITA LUMEX AC MARGIN corn-yellow  | 67,012 | 8,540 | 0,100 | 1,900 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 8,800 | 0,410 | 0,020 | 0,000 | 6,900 | 0,041 | 0,008 | 0,300 | 0,350 | 5,200 | 100       |

| VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Компонент                             | SiO2      | Al2O3     | BaO       | CaO       | CeO2      | Co 2O3    | Cr2O3     | Fe3O3     | K2O        | Li 2O      | MgO       | Mn2O3     | Na2O      | P4O10     | ZnO2       | TiO2       | ZrO2      | B2O3      |           |
| Регистрационный номер CAS             | 7631-86-9 | 1344-28-1 | 1304-28-5 | 1305-78-8 | 1306-38-3 | 1308-04-9 | 1308-38-9 | 1309-37-1 | 12136-45-7 | 12057-24-8 | 1309-48-4 | 1309-64-4 | 1313-59-3 | 1314-56-3 | 18282-10-5 | 13463-67-7 | 1314-23-4 | 1303-86-2 |           |
| Состав (%)                            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           | Всего (%) |
| VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory    | 68,012    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,003     | 0,000     | 0,001     | 0,064     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,151      | 0,489     | 7,112     | 100       |
| VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE almond   | 68,017    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,003     | 0,000     | 0,000     | 0,053     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,000     | 6,200     | 0,100     | 0,000      | 0,190      | 0,489     | 7,112     | 100       |
| VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE hazelnut | 68,019    | 6,700     | 0,101     | 2,100     | 0,002     | 0,000     | 0,000     | 0,016     | 8,300      | 0,652      | 0,050     | 0,007     | 6,200     | 0,100     | 0,010      | 0,151      | 0,489     | 7,103     | 100       |

## 2. VITA AMBRIA®

| Материал                                                                   | Производитель                                       | Содержание |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| кремния диоксид CAS-№ (номер в паспорте безопасности вещества)* 14808-60-7 | VITA<br>Zahnfabrik H.<br>Rauter<br>GmbH &<br>Co. KG | 58 – 66    |
| оксид лития CAS-№ 12057-24-8                                               |                                                     | 12 – 16    |
| диоксид циркония CAS-№ 1314-23-4                                           |                                                     | 8 – 12     |
| оксид алюминия CAS-№ 1344-28-1                                             |                                                     | 1 – 4      |
| пентоксид фосфора CAS-№ 1314-56-3                                          |                                                     | 2 – 6      |
| оксид калия CAS-№ 12136-45-7                                               |                                                     | 1 – 4      |
| оксид церия CAS-№ 1306-38-3                                                |                                                     | 0 – 4      |
| оксид тербия CAS-№ 12037-01-3                                              |                                                     | 1 – 4      |
| триоксид бора CAS-№ 1303-86-2                                              |                                                     | 1 – 4      |
| оксид ванадия CAS-№ 1314-62-1                                              |                                                     | < 1        |
| оксид эрбия CAS-№ 12061-16-4                                               |                                                     | < 1        |
| оксид празеодима CAS-№ 12037-29-5                                          |                                                     | < 1        |
| оксид марганца CAS-№ 1313-13-9                                             |                                                     | < 1        |

### Материалы принадлежностей

| Принадлежности                                                   | Материалы                                                                           | Производитель | Содержание |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Жидкость для смешивания VITA AMBRIA® INVEST F, 1000 мл           | Аморфный кремнезем, водный коллоидный раствор (CAS аморфного кремнезема: 7631-86-9) | LUKADENT GmbH | 100%       |
| Порошок паковочный VITA AMBRIA® INVEST P, 50 пакетиков по 100 гр | Смесь кварца, кристобалита и оксида магния:                                         | LUKADENT GmbH | -          |
|                                                                  | Оксид кремния (CAS: 14808-60-7)                                                     |               | 50-70%     |
|                                                                  | кристобалит (CAS: 14464-46-1)                                                       |               | 10-30%     |
|                                                                  | аммоний-дигидрофосфат (CAS: 7722-76-1)                                              |               | 5-15%      |
|                                                                  | оксид магния (CAS: 1309-48-4)                                                       |               | 5-15%      |

### Химический состав:

| Цвет                      | Состав | SiO <sub>2</sub> | Li <sub>2</sub> O | ZrO <sub>2</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> O | CeO <sub>2</sub> | Tb <sub>4</sub> O <sub>7</sub> | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Всего  |
|---------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| Регистрационный номер CAS |        | 7631-86-9        | 12057-45-7        | 1314-23-4        | 1314-56-3                     | 1344-28-1                      | 12136-45-7       | 1306-38-3        | 12037-01-3                     | 1303-86-2                     | 12061-16-4                     | 1314-62-1                     |        |
| OM1 T                     | %      | 63,20            | 14,30             | 10,00            | 4,00                          | 2,00                           | 2,00             | 1,00             | 1,50                           | 2,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 100,00 |
| OM1 HT                    | %      | 62,15            | 14,05             | 10,00            | 4,00                          | 3,00                           | 2,00             | 1,20             | 1,50                           | 2,00                          | 0,10                           | 0,00                          | 100,00 |



|             |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------|---|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 0M3<br>T    | % | 62,90 | 14,20 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 100,00 |
| 0M3<br>HT   | % | 62,25 | 14,05 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| A1-<br>HT   | % | 61,75 | 13,95 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,60 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| A1-T        | % | 62,30 | 14,10 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 0,20 | 0,10 | 100,00 |
| A2-<br>HT   | % | 61,25 | 13,85 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,20 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| A2-T        | % | 62,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 1,50 | 2,00 | 0,20 | 0,10 | 100,00 |
| A3-<br>HT   | % | 61,25 | 13,85 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 100,00 |
| A3-T        | % | 62,15 | 14,05 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,20 | 100,00 |
| A3,5<br>-HT | % | 61,10 | 13,80 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,20 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,30 | 100,00 |
| A3,5<br>T   | % | 61,80 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,40 | 100,00 |
| B1T         | % | 62,55 | 14,15 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,60 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| B1-<br>HT   | % | 61,60 | 13,90 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| B2-<br>HT   | % | 61,40 | 13,90 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| B2-T        | % | 62,50 | 14,10 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,60 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,20 | 100,00 |
| C2T         | % | 62,40 | 14,10 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 100,00 |
| C2H<br>T    | % | 61,40 | 13,90 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 100,00 |
| D2-<br>HT   | % | 61,65 | 13,95 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| D2T         | % | 62,50 | 14,10 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |

#### Массогабаритные характеристики

| Наименование                                            | Длина           | Ширина          | Высота          | Масса        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA® |                 |                 |                 |              |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок A1-T,<br>размер S              | 8,4 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок A2-T,<br>размер S              | 8,4 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок A3-T,<br>размер S              | 8,4 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок B1-T,<br>размер S              | 8,4 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок B2-T,<br>размер S              | 8,4 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок C2-T,<br>размер S              | 8,4 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г |

[illegible]



|                                                                                 |                  |                  |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок C2-НТ,<br>размер L                                     | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок D2-НТ,<br>размер L                                     | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M1-Т,<br>размер S                                     | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M3-Т,<br>размер S                                     | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M1-НТ,<br>размер S                                    | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M3-НТ,<br>размер S                                    | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M1-Т,<br>размер L                                     | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M3-Т,<br>размер L                                     | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M1-НТ,<br>размер L                                    | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| VITA AMBRIA®,<br>оттенок 0M3-НТ,<br>размер L                                    | 8,4 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см  | 2,0 см ± 0,1 см | 23 г ± 0,1 г   |
| <b>Принадлежности</b>                                                           |                  |                  |                 |                |
| Жидкость для<br>смешивания VITA<br>AMBRIA®<br>INVEST F, 1000<br>мл.             | 25 см ± 0,1 см   | 8,5 см ± 0,1 см  | 7,0 см ± 0,1 см | 1322 г ± 0,1 г |
| Порошок<br>паковочный VITA<br>AMBRIA®<br>INVEST P, 50<br>пакетиков по 100<br>гр | 12,5 см ± 0,1 см | 12,0 см ± 0,1 см | 1,5 см ± 0,1 см | 5285 г ± 0,1 г |
| <b>Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC</b>                |                  |                  |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A1,<br>12 г.                                         | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A2,<br>12 г.                                         | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A3,<br>12 г.                                         | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>A3.5, 12 г.                                       | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A4,<br>12 г.                                         | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |

|                                           |                 |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B1,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B2,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B3,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B4,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C1,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C2,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C3,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C4,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, D2,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, D3,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, D4,<br>12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A1,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A2,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A3,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>A3.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, A4,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B1,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B2,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B3,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, B4,<br>50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |



|                                            |                 |                 |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C1,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C2,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C3,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, C4,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, D2,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, D3,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE, D4,<br>50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>OM1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>OM2, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>OM3, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>1M1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA AC®<br>DENTINE, 1M2, 12<br>г.         | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2M1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2M2, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2M3, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2L1.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2L2.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2R1.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2R2.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3M1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |

|                                             |                 |                 |                 |                |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3M2, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3M3, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3R.1.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3R2.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3L1.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3L2.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4M1, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4M2, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4M3, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4L1.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4L2.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4R1.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4R2.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>5M1, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>5M2, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>5M3, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>OM1, 50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>OM2, 50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,7 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>OM3, 50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>IM1, 50 г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |



|                                            |                 |                 |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>1M2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2M1, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2M2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2M3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2L1.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2L2.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2R1.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>2R2.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3M1, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3M2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3M3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3R1.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3R2.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3L1.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>3L2.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4M1, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4M2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4M3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4L1.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4L2.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |

|                                                  |                 |                 |                 |                |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4R1.5, 50 г.       | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>4R2.5, 50 г.       | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>5M1, 50 г.         | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>5M2, 50 г.         | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE,<br>5M3, 50 г.         | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A2, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A3, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A3.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A4, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B2, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B3, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B4, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C1, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C2, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C3, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C4, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, D2, 12 г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |



|                                                  |                 |                 |                 |                |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DENTINE, D4, 12 г.                               |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A1, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A3.5, 50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, A4, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B1, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, B4, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C1, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, C4, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, D2, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, D3, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, D4, 50 г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM1, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM2, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE                         | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |

|                                                    |                 |                 |                 |                |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DENTINE, OM3, 12 г.                                |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 1M1, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 1M2, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M1, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M2, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M3, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2L1.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2L.2.5, 12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2R1.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2R2.5         | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M1, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M2, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M3, 12 г.    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3R1.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3R2.5, 12 г.  | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3L1.5,        | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |



|                                                      |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 12 г.                                                |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3L2.5,<br>12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M1, 12<br>г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M2, 12<br>г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M3, 12<br>г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4L1.5,<br>12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4L2.5,<br>12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4R1.5,<br>12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4R2.5,<br>12 г. | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M1, 12<br>г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M2, 12<br>г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M3, 12<br>г.   | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM1, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM2, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, OM3, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 1M1, 50         | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |

|                                                       |                 |                 |                 |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| г.                                                    |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 1M2, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M1, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M2, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2M3, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2L1.5,<br>50 г.  | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2L.2.5,<br>50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2R1.5,<br>50 г.  | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 2R2.5,<br>50 г.  | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M1, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M2, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3M3, 50<br>г.    | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3R.1.5,<br>50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3R2.5,<br>50 г.  | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3L1.5,<br>50 г.  | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 3L2.5,<br>50 г.  | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |



|                                                      |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 50 г.                                                |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M1, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M2, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4M3, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4L1.5,<br>50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4L2.5,<br>50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4R1.5,<br>50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 4R2.5,<br>50 г. | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M1, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M2, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE<br>DENTINE, 5M3, 50<br>г.   | 6,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 5,2 см ± 0,1 см | 68,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>smoky white      | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>light blonde,    | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC,<br>TRANSLUCENT<br>misty rose      | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>sunlight         | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT                     | 4,5 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |

|                                                         |                 |                 |                 |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| sun intense                                             |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>waterdrop           | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>deep blue           | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>TRANSLUCENT<br>forry grey,         | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE<br>MODIFIER, cloudy-<br>white | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE<br>MODIFIER,<br>caramel       | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC, DENTINE<br>MODIFIER, honey           | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE<br>MODIFIER, copper           | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC DENTINE<br>MODIFIER, brown            | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC FLUO<br>INTENSE, arctic<br>white      | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC FLUO<br>INTENSE, cream                | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC, FLUO<br>INTENSE,<br>cappuccino       | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC FLUO<br>INTENSE, sand                 | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC FLUO<br>INTENSE, sesame               | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC PEARL, shell                          | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC MAMELON,<br>saffron                   | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC MAMELON,<br>honey melon               | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAL<br>TRANSLUCENT<br>opal neutral   | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®                                             | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |



|                                                     |                 |                 |                 |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| AC OPAL<br>TRANSLUCENT<br>opal sky                  |                 |                 |                 |                |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAL<br>TRANSLUCENT<br>opal azure | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>clear, 12 r.            | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL light,<br>12 r.            | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>medium, 12 r.           | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>intense, 12 r.          | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>for, 12 r.              | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>clear, 50 r             | 6,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 68,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL light,<br>50 r             | 6,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 68,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>medium, 50 r            | 6,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 68,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>intense, 50 r           | 6,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 68,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC ENAMEL<br>for, 50 r               | 6,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 5,2 cm ± 0,1 cm | 68,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC CORRECTIVE<br>neutral             | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC CORRECTIVE<br>desert              | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC GINGIVA<br>light rose             | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>GINGIVAnectarine               | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>GINGIVArrapefruit              | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC<br>GINGIVARosewood                | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC GINGIVApurple                     | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |
| VITA LUMEX®<br>AC GINGIVAdEEP<br>red                | 4,5 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 3,4 cm ± 0,1 cm | 19,4 r ± 0,1 r |

|                                                                                        |                  |                 |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VITA LUMEX®<br>AC GINGIVA dark red                                                     | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC GINGIVA pale papilla                                                 | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE opaque-0                                                      | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE opaque-1                                                      | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE opaque-2                                                      | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE opaque-3                                                      | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE opaque-4                                                      | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC OPAQUE opaque-5                                                      | 4,5 см ± 0,1 см  | 3,4 см ± 0,1 см | 3,4 см ± 0,1 см | 19,4 г ± 0,1 г |
| VITA LUMEX®<br>AC MARGIN straw-yellow                                                  | 5,1 см ± 0,1 см  | 5,1 см ± 0,1 см | 6,4 ± 0,1 см    | 65 г ± 0,1 г   |
| VITA LUMEX®<br>AC MARGIN corn-yellow                                                   | 5,1 см ± 0,1 см  | 5,1 см ± 0,1 см | 6,4 ± 0,1 см    | 65 г ± 0,1 г   |
| VITA LUMEX®<br>AC CHROMA INTENSE ivory                                                 | 5,1 см ± 0,1 см  | 5,1 см ± 0,1 см | 6,4 ± 0,1 см    | 65 г ± 0,1 г   |
| VITA LUMEX®<br>AC CHROMA INTENSE almond                                                | 5,1 см ± 0,1 см  | 5,1 см ± 0,1 см | 6,4 ± 0,1 см    | 65 г ± 0,1 г   |
| VITA LUMEX®<br>AC CHROMA INTENSE hazelnut                                              | 5,1 см ± 0,1 см  | 5,1 см ± 0,1 см | 6,4 ± 0,1 см    | 65 г ± 0,1 г   |
| <b>Принадлежности</b>                                                                  |                  |                 |                 |                |
| Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC (VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID), 50 ml./50мл.   | 9,7 см ± 0,1 см  | 3,7 см ± 0,1 см | 3,7 см ± 0,1 см | 65 г ± 0,1 г   |
| Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC (VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID), 250ml./250 мл. | 16,5 см ± 0,1 см | 6,0 см ± 0,1 см | 6,0 см ± 0,1 см | 280 г ± 0,1 г  |

### Характеристики:



Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе: 0

Пористость, число пор: не более 16 диаметром более 30 мкм на поверхности 1 мм

Коэффициент термического расширения [температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР)]:

VITA AMBRIA®:  $8,9-9,9 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

VITA LUMEX® AC:  $8,3-9,3 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Прочность при изгибе:

VITA AMBRIA®: 540 МПа $\pm$ 76 МПа

VITA LUMEX® AC: 100 МПа  $\pm$ 14 МПа

Технологичность: материал технологичен, при смешивании с водой не образуются комочки и гранулы. Паста удобна для ручной формовки. Излишки влаги хорошо удаляемы при конденсации. Образец держит форму

Линейная усадка при обжиге:  $\leq 16\%$

Химическая растворимость:  $\leq 0,05\%$

### **Комплект поставки изделия**

Материал реставрационный стоматологический VITA, варианты исполнения: VITA AMBRIA®; VITA LUMEX® AC:

I. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®:

1. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade A1-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

2. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade A2-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

3. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade A3-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

4. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade B1-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

5. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade B2-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

6. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade C2-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

7. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade D2-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

8. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade A1-HT, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

9. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade A2-HT, size S) – 5 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
10. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade A3-HT, size S) – 5 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
11. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade B1-HT, size S) – 5 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
12. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade B2-HT, size S) – 5 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
13. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade C2-HT, size S) – 5 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
14. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade D2-HT, size S) – 5 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
15. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade A1-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
16. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade A2-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
17. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade A3-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
18. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade B1-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
19. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade B2-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
20. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade C2-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
21. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade D2-T, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
22. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A1-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade A1-HT, size L) – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
23. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade A2-HT, size L) – 3 шт.



Инструкция по применению – 1 шт.

24. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок A3-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade A3-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

25. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B1-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade B1-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

26. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок B2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade B2-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

27. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок C2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade C2-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

28. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок D2-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade D2-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

29. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M1-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

30. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-T, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M3-T, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

31. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M1-HT, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

32. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-HT, размер S (VITA AMBRIA®, shade 0M3-HT, size S) – 5 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

33. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M1-T, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

34. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-T, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M3-T, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

35. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M1-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M1-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

36. Материал реставрационный стоматологический VITA AMBRIA®, оттенок 0M3-HT, размер L (VITA AMBRIA®, shade 0M3-HT, size L) – 3 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Принадлежности:

1. Жидкость для смешивания VITA AMBRIA® INVEST F, 1000 мл.

2. Порошок паковочный VITA AMBRIA® INVEST P, 50 пакетиков по 100 гр.

II. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC:

1. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

2. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

3. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

4. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 1 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 1 M1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

5. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 1 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 1 M2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

6. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 L1.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

7. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 L2.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

8. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 M1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

9. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 M2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

10. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 M3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

11. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 R1.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

12. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 R2.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

13. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 L1.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

14. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 L2.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.



15. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 M1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
16. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 M2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
17. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 M3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
18. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 R1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
19. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 R2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
20. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 L1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
21. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 L2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
22. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 M1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
23. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 M2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
24. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 M3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
25. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 R1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
26. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 R2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
27. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 5 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 5 M1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
28. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 5 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 5 M2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
29. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 5 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 5 M3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

30. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M1, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

31. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

32. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 0 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 0 M3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

33. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 1 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 1 M1, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

34. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 1 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 1 M2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

35. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2L1.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

36. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2L2.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

37. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 M1, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

38. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 M2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

39. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 M3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

40. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 R1.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

41. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 2 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 2 R2.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

42. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 L1.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

43. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 L2.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.



44. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
45. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
46. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
47. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 R1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
48. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 3 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 3 R2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
49. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 L1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
50. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 L2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
51. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
52. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
53. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
54. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 R1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
55. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 4 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 4 R2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
56. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 5 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 5 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
57. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 5 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 5 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
58. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок 5 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade 5 M3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

59. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

60. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

61. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

62. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

63. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

64. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A3.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A3.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

65. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок A4, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade A4, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

66. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

67. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

68. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок B4, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade B4, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

69. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C1, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

70. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

71. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

72. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенок C4, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shade C4, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.



73. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокD2, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeD2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
74. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокD3, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeD3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
75. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокD4, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeD4, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
76. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокA1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeA1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
77. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокA3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeA3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
78. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокA3,5, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeA3,5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
79. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокA4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeA4, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
80. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокB1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeB1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
81. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокB2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeB2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
82. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокB3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeB3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
83. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокB4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeB4, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
84. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокC1, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeC1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
85. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокC2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeC2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
86. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокC3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeC3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
87. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокC4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeC4, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

88. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокD2, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeD2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

89. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокD3, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeD3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

90. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE, оттенокD4, 50 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE, shadeD4, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

91. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 0 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

92. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 0 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

93. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 0 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

94. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 1 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

95. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 1 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

96. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L1.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

97. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L2.5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

98. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

99. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

100. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.



101. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
102. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
103. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
104. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
105. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
106. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
107. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
108. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
109. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
110. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 L1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
111. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 L2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
112. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.

113. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
114. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
115. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 R1.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R1.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
116. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 R2.5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R2.5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
117. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 5 M1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
118. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 5 M2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
119. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 5 M3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
120. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 0 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
121. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 0 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
122. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 0 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 0 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
123. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 1 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
124. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 1 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 1 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
125. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.



126. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 L2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
127. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
128. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
129. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
130. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
131. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 2 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 2 R2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
132. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
133. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 L2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
134. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
135. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
136. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
137. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.

138. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 3 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 3 R2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
139. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 L1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
140. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 L2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 L2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
141. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
142. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
143. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
144. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 R1.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R1.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
145. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 4 R2.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 4 R2.5, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
146. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 5 M1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M1, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
147. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 5 M2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M2, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
148. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE 5 M3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade 5 M3, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
149. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE A1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
150. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE A2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade A2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.



151. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
152. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA3,5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA3,5, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
153. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA4, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
154. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
155. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
156. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
157. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB4, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
158. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC1, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
159. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
160. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
161. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC4, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
162. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINED2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeD2, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
163. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINED3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeD3, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
164. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINED4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeD4, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
165. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA1, 50 г.) – 1 шт.



Инструкция по применению – 1 шт.

166. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

167. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

168. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA3.5, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA3.5, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

169. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEA4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeA4, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

170. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB1, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

171. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

172. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

173. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEB4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeB4, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

174. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC1, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC1, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

175. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

176. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

177. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINEC4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeC4, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

178. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINED2, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeD2, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

179. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINED3, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shadeD3, 50 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.



180. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINED4, 50 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE, shade D4, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
181. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT smoky white, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade smoky white, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
182. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT light blonde, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade light blonde, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
183. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT misty rose, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade misty rose, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
184. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT sunlight, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade sunlight, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
185. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT sun intense, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade sun intense, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
186. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT waterdrop, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade waterdrop, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
187. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT deep blue, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade deep blue, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
188. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT foggy grey, 12 г. (VITA LUMEX® AC TRANSLUCENT, shade foggy grey, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
189. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER cloudy-white, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade cloudy-white, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
190. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER caramel, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade caramel, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
191. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER honey, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade honey, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
192. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER copper, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade copper, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.

193. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER brown, 12 г. (VITA LUMEX® AC DENTINE MODIFIER, shade brown, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
194. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE arctic white, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade arctic white, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
195. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE cream, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade cream, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
196. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE cappuccino, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade cappuccino, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
197. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE sand, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade sand, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
198. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE sesame, 12 г. (VITA LUMEX® AC FLUO INTENSE, shade sesame, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
199. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC PEARL shell, 12 г. (VITA LUMEX® AC PEARL, shade shell, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
200. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MAMELON saffron, 12 г. (VITA LUMEX® AC MAMELON, shade saffron, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
201. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MAMELON honey melon, 12 г. (VITA LUMEX® AC MAMELON, shade honey melon, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
202. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT opal neutral, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, shade opal neutral, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
203. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT opal sky, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, shade opal sky, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
204. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT opal azure, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAL TRANSLUCENT, shade opal azure, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
205. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL light, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade light, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.



206. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL medium, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade medium, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
207. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL intense, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade intense, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
208. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL clear, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade clear, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
209. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL for, 12 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade for, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
210. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL light, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade light, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
211. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL medium, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade medium, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
212. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL intense, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade intense, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
213. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL clear, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade clear, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
214. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC ENAMEL for, 50 г. (VITA LUMEX® AC ENAMEL, shade for, 50 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
215. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CORRECTIVE neutral, 12 г. (VITA LUMEX® AC CORRECTIVE, shade neutral, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
216. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CORRECTIVE desert, 12 г. (VITA LUMEX® AC CORRECTIVE, shade desert, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
217. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA pale papilla, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade pale papilla, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
218. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA light rose, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade light rose, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
219. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA nectarine, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade nectarine, 12 г.) – 1 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.
220. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVA grapefruit, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade grapefruit, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

221. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVArosewood, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade rosewood, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

222. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVApurple, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade purple, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

223. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVAdEEP red, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade deep red, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

224. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC GINGIVAdark red, 12 г. (VITA LUMEX® AC GINGIVA, shade dark red, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

225. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE opaque-0, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-0, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

226. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE opaque-1, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-1, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

227. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE opaque-2, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-2, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

228. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE opaque-3, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-3, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

229. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE opaque-4, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-4, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

230. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC OPAQUE opaque-5, 12 г. (VITA LUMEX® AC OPAQUE, shade opaque-5, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

231. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MARGINstraw-yellow, 12 г. (VITA LUMEX® AC MARGIN, shade straw-yellow, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

232. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC MARGINcorn-yellow, 12 г. (VITA LUMEX® AC MARGIN, shade corn-yellow, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

233. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSEivory, 12 г. (VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, shade ivory, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

234. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSEalmond, 12 г. (VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, shade almond, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.



235. Материал реставрационный стоматологический VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE hazelnut, 12 г. (VITA LUMEX® AC CHROMA INTENSE, shade hazelnut, 12 г.) – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.


Принадлежности:

1. Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC (VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID), 50 ml./50мл.
2. Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC (VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID), 250 ml./250 мл.

## 7. Маркировка и упаковка

VITA LUMEX® AC поставляется во флаконе и потребительской упаковке.

**Символы изделия**

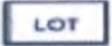
| № | Используемый символ                                                                 | Описание          | № | Используемый символ                                                                  | Описание                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 |    | Изготовитель      | 2 |    | Маркировка CE утверждена XXXX         |
| 3 |   | Дата изготовления | 4 |   | Обратитесь к инструкции по применению |
| 5 |  | Номер по каталогу | 6 |  | Код партии                            |
| 7 | Регистрационный номер                                                               |                   | 8 | Информацию о производителе                                                           |                                       |

Принадлежности:

Жидкость моделирующая VITA LUMEX® AC

Представляет из себя флакон, заполненный жидкостью, с наклеенной маркировкой.

**Символы изделия**

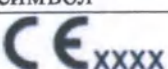
| № | Используемый символ                                                                 | Описание          | № | Используемый символ                                                                  | Описание                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 |  | Изготовитель      | 2 |  | Маркировка CE утверждена XXXX |
| 3 |  | Дата изготовления | 4 |   | Использовать до               |
| 5 |  | Номер по каталогу | 6 |  | Код партии                    |
| 7 | Номер регистрационного удостоверения                                                |                   | 8 | Информация о производителе                                                           |                               |

VITA AMBRIA®

поставляется во флаконе и потребительской упаковке.

**Символы изделия**


| № | Используемый символ                                                                 | Описание     | № | Используемый символ                                                                  | Описание                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 |  | Изготовитель | 2 |  | Маркировка CE утверждена XXXX |
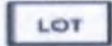
|   |                                                                                   |                   |   |                                                                                    |                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 |  | Дата изготовления | 4 |  | Обратитесь к инструкции по применению |
| 5 |  | Номер по каталогу | 6 |  | Код партии                            |
| 7 | Номер регистрационного удостоверения                                              |                   | 8 | Информация о производителе                                                         |                                       |

Принадлежности:


Жидкость для смешивания VITA AMBRIA® INVEST F, 1000 мл.

**Символы изделия**
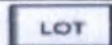
| №  | Используемый символ                                                                 | Описание               | №  | Используемый символ                                                                | Описание                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  |    | Изготовитель           | 2  |  | Маркировка CE утверждена XXXX         |
| 3  |    | Дата изготовления      | 4  |  | Обратитесь к инструкции по применению |
| 5  |    | Номер по каталогу      | 6  |  | Код партии                            |
| 7  |    | Использовать до        | 8  |  | Осторожно, холод                      |
| 9  |  | Температурный диапазон | 10 | Номер регистрационного удостоверения                                               |                                       |
| 11 | Информация о производителе                                                          |                        |    |                                                                                    |                                       |

Порошок паковочный VITA AMBRIA® INVEST P, 50 пакетиков по 100 гр.

**Символы изделия**


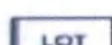
| № | Используемый символ                                                                 | Описание                              | № | Используемый символ                                                                  | Описание   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 |  | Обратитесь к инструкции по применению | 2 |  | Код партии |
| 3 |  | Использовать до                       | 4 | Номер регистрационного удостоверения                                                 |            |
| 5 | Информация о производителе                                                          |                                       |   |                                                                                      |            |

Маркировка потребительской упаковки, помещается 50 пакетов с порошком

**Символы изделия**

| № | Используемый символ                                                                 | Описание          | № | Используемый символ                                                                  | Описание                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 |  | Изготовитель      | 2 |  | Маркировка CE утверждена XXXX         |
| 3 |  | Дата изготовления | 4 |  | Обратитесь к инструкции по применению |

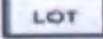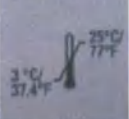

|    |                                                                                   |                        |    |                                                                                    |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5  |  | Номер по каталогу      | 6  |  | Код партии       |
| 7  |  | Использовать до        | 8  |  | Осторожно, холод |
| 9  |  | Температурный диапазон | 10 | Номер регистрационного удостоверения                                               |                  |
| 11 | Информация о производителе                                                        |                        |    |                                                                                    |                  |

## 8. Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ ISO 14971-2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»,

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования»,

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

ГОСТ 31571-2012 «Керамика стоматологическая. Технические требования. Методы испытаний»

## 9. Транспортирование, хранение и эксплуатация

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями:

|                 | Температура   | Относительная влажность |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| Транспортировка | От 3 до 25 °C | Менее 50%               |
| Хранение        |               |                         |
| Эксплуатация    | От 1 до 55 °C | Менее 50%               |

### Срок годности

VITA LUMEX® AC POWDER без ограничения срока.

VITA LUMEX® AC MODELLING LIQUID имеет период хранения 72 месяца.

VITA AMBRIA® без ограничения срока.

## 10. Сведения о стерильности изделия

Изделие поставляется не стерильным.

## 11. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

## 12. Гарантии

Успешная обработка VITA AMBRIA® не гарантируется в следующих случаях:

- Прессование нескольких гранул VITA AMBRIA® в одной формовочной оправе.
- Применение керамической облицовки, непригодной для облицовки VITA AMBRIA® или имеющей температуру обжига  $> 770^{\circ}\text{C}$ .
- Превышение установленной минимальной толщины стенок и соединительной части зубного моста.

Прессование с избыточным давлением: VITA AMBRIA® не подходит для прессования с избыточным давлением циркониевых и металлических мостовидных протезов

### Производитель:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, (ВИТА Цанфабрик, Г.Раутер ГмбХ энд Ко. КГ)

Spitalgasse 3,D - 79713 Bad Säckingen, Germany, Германия.

Tel: +49(0)7761/562-0

info@vita-zahnfabrik.co

### Уполномоченный представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Компани"

Россия, 630084, Новосибирская область, Г.О. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул.

Трикотажная д 55 оф 3

Тел.: 8 (383)-383-20-20

e-mail: info@germadent.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

ВИТА Цанфабрик Г. Раутер ГмбХ энд Ко. КГ

Руководитель отдела Управления качеством и  
Нормативного обеспечения  
(должность)

Бернд Уолкер  
(имя)

Штамп: ВИТА ЦАНФАБРИК  
Г. Раутер ГмбХ энд Ко. КГ  
Д-79713 Бад Зекинген  
/подпись/

(подпись)

« 15 » 05 2023 г.  
«день» месяц (цифрами)  
М.П. / Штамп

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Материал реставрационный стоматологический VITA,  
варианты исполнения: VITA AMBRIA®; VITA LUMEX® AC,**  
производства VITA Zahnfabrick H. Rauter GmbH & Co. KG, (ВИТА  
Цанфабрик, Г. Раутер ГмбХ энд Ко.КГ), Германия

2023

Место нахождения коммандитное товарищества: Бад Зекинген • Регистрационный суд Фрайбург ин Брайсгау HRA 630648 ■ Участник общества, несущий персональную ответственность: Раутер Бетайлингсгезельшафт мбХ, Бад Зекинген • Регистрационный суд Фрайбург ин Брайсгау. HRB 630268 ■ Управляющие: Генри Р.Й. Раутер. Доктор Роберт Раутер, Доктор Эмануэль Раутер, Бад Зекинген. Идентификационный номер плательщика налога с оборота: DE 142697558

**Нотариальное заверение подлинности подписи**

Настоящим я удостоверяю подлинность подписи, проставленной в моем присутствии

Господином Беридом Уолкером  
Дата рождения 13.09.1962  
Рабочий адрес: Шпитальгассе 3,  
в 79713 Бад Зекинген,  
-личность установлена-

В соответствии с требованиями §378 Пункт 3 Предложение 1 Закона о производстве по семейным делам и вопросам добровольной подсудности (FamFG) и §15 Пункт 3 Предложение 1 Положения о сборах (GBO), я проверил приведенную выше подписанную заявку или заявление на регистрацию.

Бад Зекинген, 15.05.2023

(Подпись)  
Штадлер, Нотариус

Оттиск печати: КАЙ-КРИСТОФ ШТАДЛЕР  
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА.  
БАД ЗЕКИНГЕН



Перевод с английского и немецкого языков на русский язык выполнен переводчиком  
Зацепиной Надеждой Николаевной. Знание вышеуказанных языков подтверждаю.

Зацепина НН

Российская Федерация

Город Москва.

Пятого июня две тысячи двадцать третьего года.

Я, Алехин Евгений Владимирович, нотариус города Москвы,  
свидетельствую подлинность подписи переводчика  
Зацепиной Надежды Николаевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 57/171-п/77-2023- 8-1949.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 рублей 00 копеек.



Е.В. Алехин

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 135 листах(ов)

Е.В. Алехин

