


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«Тиреоглобулин Калибраторы (ARCHITECT Thyroglobulin Calibrators)»**





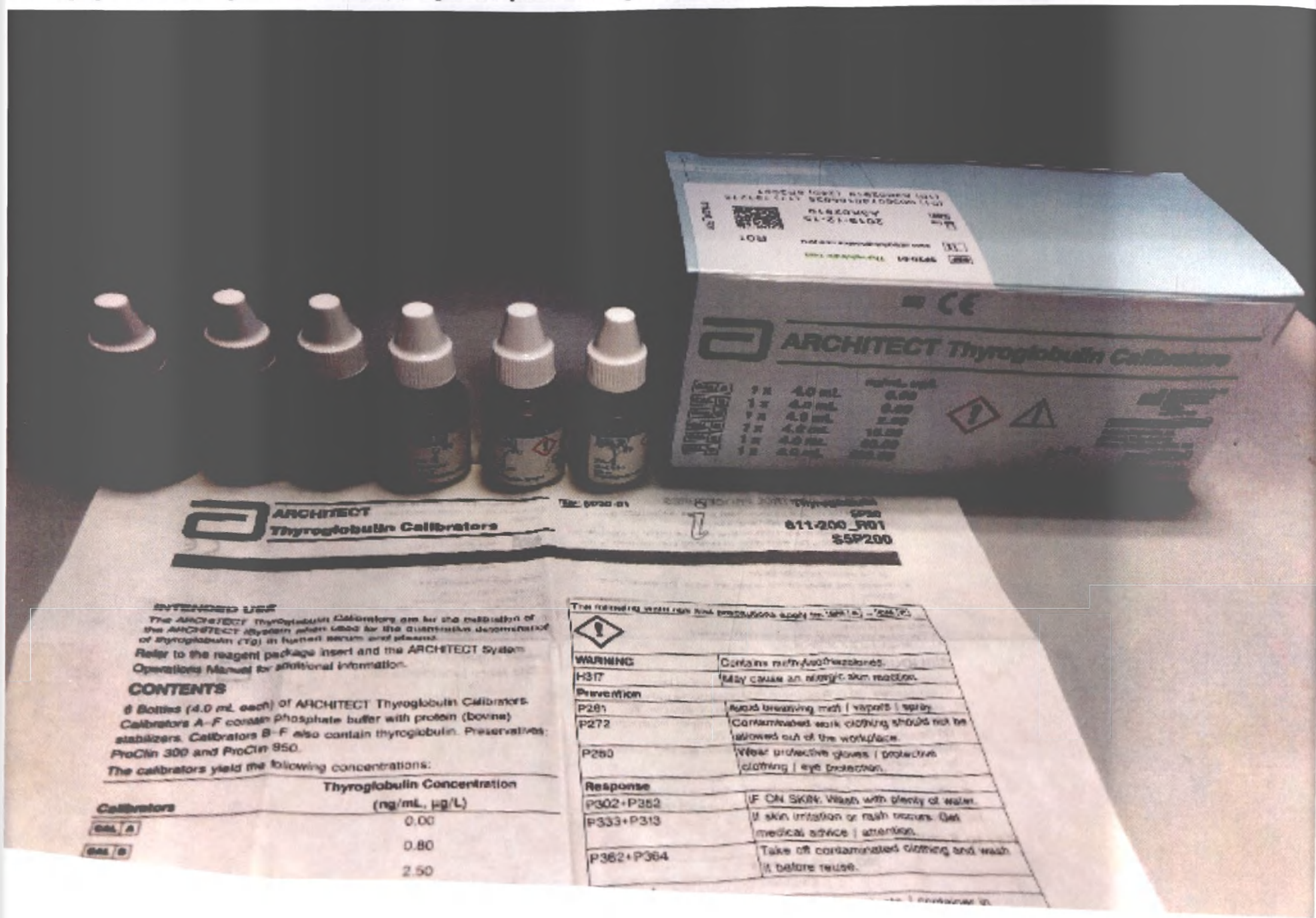

ARCHITECT
Thyroglobulin Calibrators

INTENDED USE
The ARCHITECT Thyroglobulin Calibrators are for the calibration of the ARCHITECT system when used for the quantitative determination of thyroglobulin (TG) in human serum and plasma.
Refer to the reagent package insert and the ARCHITECT system Operations Manual for additional information.

CONTENTS
6 Bottles (4.0 mL each) of ARCHITECT Thyroglobulin Calibrators. Calibrators A-F contain phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers. Calibrators B-F also contain thyroglobulin. Preservatives: ProClin 300 and ProClin 950.
The calibrators yield the following concentrations:

Calibrators	Thyroglobulin Concentration (ng/mL, µg/L)
Cal A	0.00
Cal B	0.80
	2.50

The following warnings and precautions apply to ARCHITECT.

	WARNING	Contains methoxyethanones.
	H317	May cause an allergic skin reaction.
	Prevention	
	P261	Avoid breathing dust / vapors / spray.
	P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
	P280	Wear protective gloves / protective clothing / eye protection.
	Response	
	P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
	P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention.
	P362+P364	Take off contaminated clothing and wash it before reuse.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5

листов


Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«Тиреоглобулин Калибраторы (ARCHITECT Thyroglobulin Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

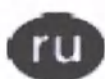

REF 5P20-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT

«Тиреоглобулин Калибраторы (ARCHITECT Thyroglobulin Calibrators)»

в составе: Калибратор А (ARCHITECT Thyroglobulin CAL A) - 1 флакон х 4,0 мл; Калибратор В (ARCHITECT Thyroglobulin CAL B) - 1 флакон х 4,0 мл; Калибратор С (ARCHITECT Thyroglobulin CAL C) - 1 флакон х 4,0 мл; Калибратор D (ARCHITECT Thyroglobulin CAL D) - 1 флакон х 4,0 мл; Калибратор Е (ARCHITECT Thyroglobulin CAL E) - 1 флакон х 4,0 мл; Калибратор F (ARCHITECT Thyroglobulin CAL F) - 1 флакон х 4,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Fujirebio Diagnostics, Inc. 201 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355, USA / Страна происхождения: США / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия Анти-НВс IgM Калибраторы (Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators)

61-205_P01



Exp.

www.abbottdiagnostics.com/IFU




Thyroglobulin Calb 5P20-01 REF



ARCHITECT Thyroglobulin Calibrators

			ng/mL, µg/L
CAL A	1 x	4.0 mL	0.00
CAL B	1 x	4.0 mL	0.80
CAL C	1 x	4.0 mL	2.50
CAL D	1 x	4.0 mL	10.00
CAL E	1 x	4.0 mL	50.00
CAL F	1 x	4.0 mL	500.00

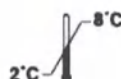

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-5122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
201 Great Valley Parkway
Malvern, Pennsylvania 19355, USA


PRODUCT OF USA




**Thyroglobulin
Cals**

Маркировка компонентов медицинского изделия


- Калибратор А (ARCHITECT Thyroglobulin CAL A)

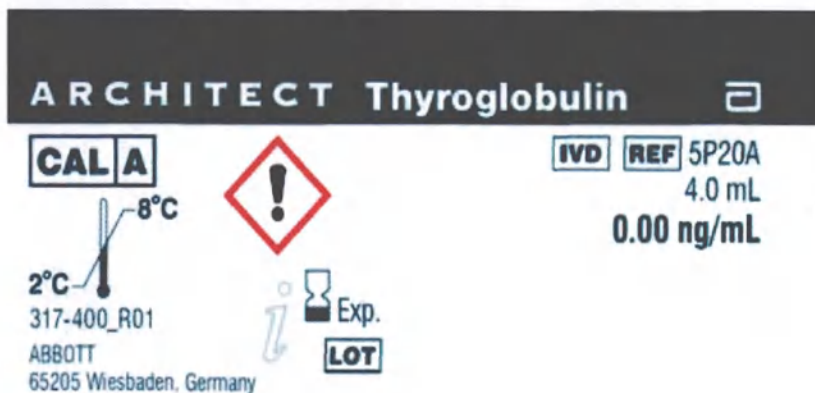

- Калибратор В (ARCHITECT Thyroglobulin CAL B)

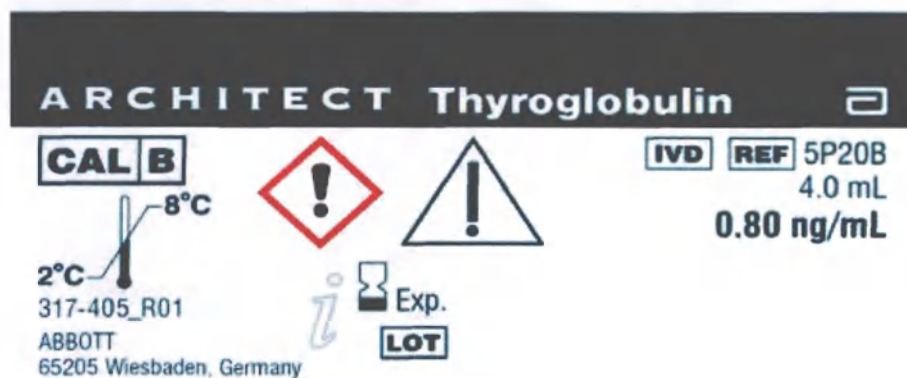


- Калибратор С (ARCHITECT Thyroglobulin CAL C)

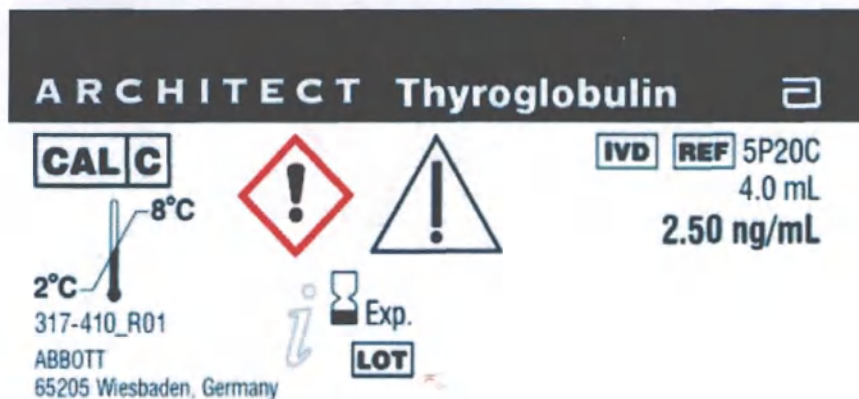

- Калибратор D (ARCHITECT Thyroglobulin CAL D)

ARCHITECT Thyroglobulin 

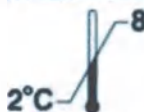CAL D  8°C
2°C
317-415_R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

  Exp.
LOT

IVD REF 5P20D
4.0 mL
10.00 ng/mL

- Калибратор E (ARCHITECT Thyroglobulin CAL E)

ARCHITECT Thyroglobulin 

CAL E  8°C
2°C
317-420_R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany


 

  Exp.
LOT

IVD REF 5P20E
4.0 mL
50.00 ng/mL

- Калибратор F (ARCHITECT Thyroglobulin CAL F)

ARCHITECT Thyroglobulin 

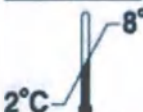CAL F  8°C
2°C
317-425_R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

  Exp.
LOT

IVD REF 5P20F
4.0 mL
500.00 ng/mL

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

Limited liability company
Abbott Laboratories