



COVIDIEN

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Covidien llc, USA

Senior Regulatory Affairs Specialist

(должность/position)

Megha Patel

(имя/name)

Megha Patel

(подпись/signature)

19/9/2022

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

"Operating document – Instruction for use" for submission in the Russian Federation

Surgipro and Surgipro II Monofilament Polypropylene Sutures

Legal Manufacturer:

Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA

STATE OF MINNESOTA
COUNTY OF *Anoka*

Subscribed and sworn to before me this 23 day of September, 2022.

Saadat M. Ali

Notary Public

My Commission Expires 31 Jan 2026



COVIDIEN

15 HAMPSHIRE STREET
MANSFIELD, MA 02048
U.S.A

[508]261-8000(T)

Монофиламентный полипропилен

*В инструкции по эксплуатации обозначен как полипропиленовый шовный материал Surgipro™.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

ОПИСАНИЕ

Монофиламентный шовный материал Surgipro™ (бесцветный или окрашенный) — это инертные, нерассасывающиеся стерильные нити, изготавливаемые из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена. Для увеличения заметности шовный материал окрашен в синий цвет. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ из соответствует всем требованиям Фармакопеи США (United States Pharmacopeia, USP) и Европейской Фармакопеи (European Pharmacopeia, EP) к нерассасывающимся хирургическим шовным материалам за исключением размеров 7-0 и 8-0, которые отличаются от максимального диаметра по USP и EP на 0,007 мм.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ показан к применению в общей хирургии для сшивания мягких тканей и/или лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии и в офтальмологии.

ДЕЙСТВИЕ

Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, за которой следует постепенная инкапсуляция шва фиброзной соединительной тканью. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ не рассасывается, и случаев существенного изменения прочности на разрыв in vivo не отмечено.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Неизвестны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Продолжительный контакт шовного материала, как и любого другого инородного тела, с солевыми растворами может привести к образованию конкрементов.
2. Повторное использование, повторная обработка и/или повторная стерилизация данного изделия могут стать причиной контаминации, инфицирования пациента, получения пациентом травмы, вызывающей необратимое ухудшение состояния здоровья, или травмы, несущей угрозу жизни. Данное изделие не подлежит повторному использованию, повторной обработке и повторной стерилизации. Изделие стерильно, если его упаковка не вскрыта и не повреждена. Следует удалить в отходы неиспользованный шовный материал, если упаковка была вскрыта. Использованные инструменты следует удалить в отходы в соответствии с действующими в учреждении конечного пользователя требованиями к удалению медицинских и биологических отходов. Хранить при комнатной температуре. Избегать длительного воздействия повышенных температур.
3. Хирурги, использующие полипропиленовый нерассасывающийся шовный материал Surgipro™ для закрытия ран, должны хорошо знать методику и технику наложения таких шовных материалов, поскольку риск раскрытия раны зависит от анатомической области и типа шовного материала.
4. При дренаже и сшивании загрязненных или инфицированных ран должны применяться приемлемые в подобных случаях хирургические методы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При обращении с этим и любым другим шовным материалом необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить нить. Не пережимайте и не перегибайте шовный материал во время использования таких хирургических инструментов, как пинцеты или иглодержатели.
2. Для обеспечения надежности узлов необходимо придерживаться общепринятой хирургической техники завязывания плоского прямоугольного узла с дополнительной петлей, если это необходимо по условиям операции и по мнению хирурга. Использование дополнительных переплетений в особенности оправдано в случае завязывания узла на монофиламентной нити.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

К нежелательным реакциям, которые связаны с использованием данного изделия, относятся: раскрытие раны, образование конкрементов при продолжительном контакте с солевыми растворами, повышенная бактериальная инфицируемость, минимальная острая воспалительная реакция и кратковременное местное раздражение.

ПОСТАВКА

Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ поставляется неокрашенным (бесцветным) или окрашенным в синий цвет фталоцианином меди. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ поставляется в следующих размерах: от 2 (5 по метрической системе) до 8-0 (0,4 по метрической системе); 10-0 (0,2 по метрической системе).

Шовный материал поставляется в стерильном виде. Нити прикреплены к иглам различных типов постоянным или съемным соединением. Шовный материал упакован в коробки, в каждой из которых содержится 12, 24 или 36 упаковок.

Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ также может поставляться с укрепляющими подкладками из ПТФЭ (политетрафторэтилена) для использования в качестве прокладок между зоной наложения шва и поверхностью ткани в целях увеличения области, несущей нагрузку. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ также поставляется в вариантах с утолщением конца в виде бусины или диска. Утолщение предназначено для крепления конца нити при внутрикожном шве или при наложении шва на сухожилия.

STERILE EO

en: Sterilized using ethylene oxide **fr:** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène **de:** Mit Ethylenoxid sterilisiert **it:** Sterilizzato con ossido di etilene **es:** Esterilizado con óxido de etileno **pt:** Esterilizado com óxido de etileno **nl:** Gesteriliseerd met ethyleenoxide **sv:** Steriliserad med etylenoxid **da:** Steriliseret med ethylenoxid **fi:** Steriloitu eteenioksidilla. **el:** Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου **pl:** Sterylizowano przy użyciu tlenku etylenu **tr:** Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir **ru:** Стерилизовано этиленоксидом **cs:** Sterilizováno ethylenoxidem **hu:** Etilén-oxidál sterilizálva **sk:** Sterilizované etylénoxidom **no:** Sterilisert med etylenoksid **sl:** Sterilizirano z etilen oksidom **bg:** Стерилизирано с этиленов оксид **ro:** Sterilizat cu oxid de etilenă **et:** Steriliseeritud etüleenoksiidiga **lv:** Sterilizēts, izmantojot etilēnoksidu **hr:** Sterilizirano etilen-oksidad **sr:** Sterilisano etilen oksidom **lt:** Sterilizuota etileno oksidu **zh:** 使用環氧乙烷灭菌 **zht:** 使用環氧乙烷滅菌 **ko:** 산화에틸렌으로 멸균 처리 **id:** Disterilkan menggunakan etilena oksida **vi:** Được tiệt trùng bằng ethylene oxide



en: Single Use **fr:** Usage unique **de:** Einmalgebrauch **it:** Monouso **es:** Un solo uso **pt:** Uso único **nl:** Voor eenmalig gebruik **sv:** För engångsbruk **da:** Engangsbrug **fi:** Kertäkäyttöinen **el:** Μίας χρήσης **pl:** Produkt jednorazowego użytku **tr:** Tek Kullanımlık **ru:** Для одноразового использования **cs:** Na jedno použití **hu:** Egyszer használatos **sk:** Na jedno použitie **no:** Engangsbruk **sl:** Za enkratno uporabo **bg:** За еднократна употреба **ro:** De unică folosință **et:** Ühekordseks kasutatav **lv:** Vienreiz lietojams **hr:** Za jednokratnu uporabu **sr:** Za jednokratnu upotrebu **lt:** Vienkartinė **zh:** 单一用途 **zht:** 單次用 **ko:** 1회용 **id:** Sekali Pakai **vi:** Dùng một lần

**Rx
ONLY**

en: Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. **fr:** Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que par un médecin ou sur ordonnance médicale. **de:** Vorsicht: Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. **it:** Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a medici o dietro prescrizione medica. **es:** Precaución: La ley federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa. **pt:** Cuidado: A lei federal dos EUA restringe a venda deste produto à prescrição de um médico. **nl:** Let op: Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts. **sv:** Viktigt! Enligt federal lag i USA får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination. **da:** Forsigtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordination af en læge. **fi:** Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. **el:** Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτού του προϊόντος μόνον σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. **pl:** Przestroga: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza niniejsze urządzenie do sprzedaży tylko przez lub na zlecenie lekarza. **tr:** Dikkat: ABD federal yasalarına göre bu cihaz sadece bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satılabilir. **ru:** Внимание! Федеральное законодательство США разрешает продажу этой продукции только врачам или по их заказу. **cs:** Upozornění: Podle federálních zákonů USA smí být tento prostředek prodáván pouze lékaři nebo na jeho objednávku. **hu:** Figyelem: Az USA szövetségi törvényei alapján ez a készülék kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető. **sk:** Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia na lekára alebo na lekársky predpis. **no:** Forsiktig: I følge amerikansk federal lovgivning (USA) kan denne enheten kun selges av eller på ordre av en lege. **si:** Pozor: Z zvezno zakonodajo ZDA je prodaja tega pripomočka dovoljena le zdravnikom ali na zdravniški recept. **bg:** Внимание: Според федералното законодателство на САЩ продажбата на това устройство може да стане само по поръчка на лекар. **ro:** Atenție: Legislația federală din S.U.A. permite comercializarea acestui dispozitiv exclusiv de către sau la recomandarea unui medic. **et:** Ettevaatus! USA föderaalseaduste kohaselt võib käesolevat seadet müüa vaid arsti tellimusel või korraldusel. **lv:** Uzmanību! Federālās likums (ASV) nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc ārsta pasūtījuma. **hr:** Oprez: Savezni zakon Sjedinjenih Američkih Država ograničava prodaju ovog uređaja samo na liječnika ili na njegov nalog. **sr:** Oprez: Savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog sredstva na lekara ili po nalogu lekara. **it:** Atsargiai. Pagal JAV federalinius įstatymus ši priemonė gali būti parduodama tik gydytojui paskyrus arba užsakius. **zh:** 小心: 美国联邦法律限定本器械只能由医生销售或遵医嘱销售。 **zht:** 小心: 美國聯邦法規規定此設置僅能由醫生或遵醫囑銷售。 **ko:** 주의: 미국 연방 법률은 본 기기를 의사에 의한 판매 또는 의사의 지시에 따른 판매로 제한합니다. **id:** Perhatian: Federal A.S. membatasi penjualan perangkat ini hanya oleh dokter atau atas perintah dokter. **vi:** Thận trọng: Luật liên bang (Hoa Kỳ) giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo yêu cầu của bác sĩ.



en: Do not resterilize **fr:** Ne pas restériliser **de:** Nicht resterilisieren **it:** Non risterilizzare **es:** No reesterilizar **pt:** Não reesterilize **nl:** Niet opnieuw steriliseren **sv:** Får inte omsteriliseras **da:** Må ikke resteriliseres **fi:** Ei saa steriloida uudelleen **el:** Μην επαναποστείρετε **pl:** Nie sterylizować ponownie **tr:** Tekrar sterilize etmeyin **ru:** Повторная стерилизация запрещена **cs:** Opakovaně nesterilizujte. **hu:** Tilos újrasterilizálni **sk:** Nesterilizujte opakovane **no:** Skal ikke resteriliseres **si:** Ne sterilizirajte ponovno **bg:** Да не се стерилизира повторно **ro:** A nu se reesteriliza **et:** Mitte reesteriliseerida **lv:** Nesterilizēt atkārtoti **hr:** Nemojte ponovno sterilizirati **sr:** Nemojte ponovo sterilisati **it:** Nesterilizuoti pakartotinai **zh:** 请勿重新灭菌 **zht:** 請勿重複滅菌 **ko:** 재멸균하지 마십시오 **id:** Jangan disterilkan ulang **vi:** Không tiệt trùng lại

	en: Do not use if package is opened or damaged. fr: Ne pas utiliser en cas d'endommagement ou d'ouverture de l'emballage. de: Bei geöffnetem oder beschädigter Verpackung nicht verwenden. it: Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. es: No usar el dispositivo si la envoltura está abierta o dañada. pt: Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada. nl: Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of geopend is. sv: Får ej användas om förpackningen är öppnad eller skadad. da: Må ikke anvendes, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget. fi: Ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut. el: Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιό. pl: Nie stosować, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone. tr: Ambalaj açılmış ya da zarar görmüşse kullanmayın. ru: Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена. cs: Pokud je balení otevřené nebo poškozené, produkt nepoužívejte. hu: Tilos felhasználni, ha a csomagolás kinyílt vagy megsérült. sk: Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený. no: Skal ikke brukes hvis emballasjen er åpnet eller skadet. sl: Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. bg: Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена. ro: A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deschis sau deteriorat. et: Ärge kasutage, kui pakend on avatud või kahjustatud. lv: Nelietot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. hr: Ne koristite ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno. sr: Ne koristiti ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno. lt: Nenaudokite, jei pakuotė atidaryta arba pažeista. zh: 如果包裝已打開或損毀，請勿使用。 zht: 如果包裝已開啟或損毀，則請勿使用。 ko: 포장 이 개봉되어 있거나 손상된 경우에는 사용하지 마십시오. id: Jangan digunakan jika kemasan terbuka atau rusak. vi: Không sử dụng nếu bao bì bị bóc mở hoặc hư hỏng.
	en: Caution, consult accompanying documents fr: Mise en garde : consulter les documents joints de: Vorsicht, Begleitdokumente beachten it: Attenzione: consultare la documentazione di accompagnamento es: Precaución, consultar documentación adjunta pt: Cuidado, consulte os documentos que acompanham o produto nl: Let op, raadpleeg de bijgevoegde documenten sv: OBS! Läs medföljande dokumentation da: Forsigtig, læs de medfølgende dokumenter fi: Huomio, lue liitteenä olevat asiakirjat el: Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα pl: Przestroga: należy zapoznać się z załączonymi dokumentami tr: Dikkat, beraberindeki belgeleri bakın ru: Внимание! Сверхьтесь с сопроводительной документацией cs: Pozor, prostudujte si příloženou dokumentaci hu: Figyelem, tanulmányozza a mellékelt dokumentumokat sk: Pozor, prečítajte si priložené dokumenty no: Forsiktig, les medfølgende dokumenter sl: Pozor, preberite priložene dokumente bg: Внимание, направете справка с приложените документи ro: Atenție, consultați documentele însoțitoare et: Ettevaatust! Lugege kaasolevaid dokumente! lv: Uzmanību, iepazīstieties ar pievienotajiem dokumentiem hr: Oprez, pročitajte prateću dokumentaciju sr: Oprez, pogledajte prateća dokumenta lt: Atsargiai, žr. lydimuosius dokumentus zh: 小心，请参阅随附文件 zht: 注意，请参阅随附文件 ko: 주의, 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. id: Perhatian, baca dokumen pendamping vi: Thận trọng, tham khảo các tài liệu đi kèm
	en: Package quantity fr: Quantité par paquet de: Anzahl pro Packung it: Quantità confezione es: Cantidad por paquete pt: Quantidade na embalagem nl: Hoeveelheid per verpakking sv: Antal i förpackningen da: Antal anordninger i pakken fi: Määrä pakkaussessa el: Ποσότητα συσκευασίας pl: Liczba sztuk w opakowaniu tr: Paket miktar ru: Количество в упаковке cs: Počet v balení hu: Csomagokénti mennyiség sk: Množstvo v balení no: Antall enheter i pakningen sl: Količina v pakiranju bg: Количество в опаковка ro: Cantitate per pachet et: Kogus pakendis lv: Izstrādājumu skaits iepakojumā hr: Količina u pakiranju sr: Količina u pakovanju lt: Kiekis pakuotėje zh: 包裝數量 zht: 包裝數量 ko: 포장 수량 id: Jumlah kemasan vi: Số lượng đóng gói
	en: CE Mark

© 2011 Covidien.

 Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.

 Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore, Ireland.

www.covidien.com

+1 800 633 8766

+1 763 514 4000

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien logo and Positive Results for Life are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. Other brands are trademarks of a Covidien company, *** brands are trademarks of their respective owner.

2020 / 05 - 2



COVIDIEN

УТВЕРЖДАЮ

«Ковидиен ллс» (Covidien llc), США
Старший специалист регуляторного отдела
(должность)

Мегха Пател (Megha Patel)
(имя)

<подписано>

(подпись)

19.09.2022

«день» месяц (цифрами)

«Эксплуатационная документация - Инструкция по применению» для подачи в Российской Федерации

Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена

Официальный производитель:

«Ковидиен ллс» (Covidien llc), расположенная по адресу: 15 Гэмпшир Стрит, Мэнсфилд, штат Массачусетс
02048, США (15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA)

ШТАТ МИННЕСОТА
ОКРУГ Анока


Подписано и удостоверено в моем
присутствии

23

Сентября 2022 г.

<подписано>

Нотариус
Срок действия моих полномочий
истекает 31 января 2026 г.

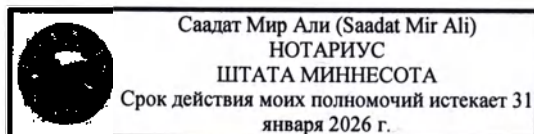

«КОВИДИЕН»

15 ГЭМПШИР СТРИТ
МЭНСФИЛД, МАССАЧУСЕТС 02048
США

[508]261-8000 [Т]

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Искусных Дмитрием Александровичем

Российская Федерация

Город Москва

Восьмого декабря две тысячи двадцать второго года

**Я, Алехин Евгений Владимирович, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи переводчика Искусных Дмитрия Александровича.**

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 57/171-н/77-2022-16-1820.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Е.В.Алехин



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 5 лист (-а, -ов)



COVIDIEN

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Covidien llc, USA

Senior Regulatory Affairs Specialist

(должность/position)

Megha Patel

(имя name)

Megha Patel

(подпись/signature)

19/9/2022

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

"Appendix to operating document – Instruction for use" for submission in the Russian Federation

Surgipro and Surgipro II Monofilament Polypropylene Sutures

Legal Manufacturer:

Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA


STATE OF MINNESOTA
COUNTY OF *Anoka*

Subscribed and sworn to before me this 23 day of September, 2022.

Saadat M. Ali

Notary Public

My Commission Expires 31 Jan 2026

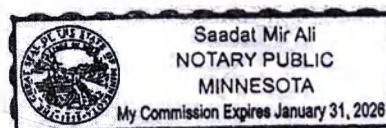

COVIDIEN

15 HAMPSHIRE STREET
MANSFIELD, MA 02048
U.S.A

[508]261-8000 [T]



COVIDIEN

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Covidien llc, USA

Senior Regulatory Affairs Specialist

(должность/position)

Megha Patel

(имя name)

Megha Patel

(подпись/signature)

19/9/2022

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

"Appendix to operating document – Instruction for use" for submission in the Russian Federation

Surgipro and Surgipro II Monofilament Polypropylene Sutures

Legal Manufacturer:

Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA


STATE OF MINNESOTA
COUNTY OF *Anoka*

Subscribed and sworn to before me this 23 day of September, 2022.

Saadat M. Ali

Notary Public

My Commission Expires 31 Jan 2026

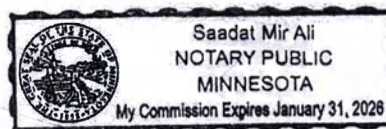

COVIDIEN

15 HAMPSHIRE STREET
MANSFIELD, MA 02048
U.S.A

[508]261-8000 [T]

Приложение к эксплуатационной документации

Примечание

Следующие наименования, использованные по тексту данного документа, являются тождественными наименованию медицинского изделия «Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения:»:

- Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена;
- Материал шовный Surgipro и Surgipro II;
- Полипропиленовый шовный материал Surgipro;
- Монофиламентные шовные материалы SURGIPRO и SURGIPRO II;
- Шовный материал;
- Материал шовный;
- Нерассасывающийся шовный материал.

1. Наименование медицинского изделия	Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения: 1. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 2. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 3. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 4. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 37 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 5. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 30 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 6. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
--------------------------------------	--

По согласованию с Заказчиком

7. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
8. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
9. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
10. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 90 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
11. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 37 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
12. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 37 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
13. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
14. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
15. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 100 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
16. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 240 см, одна игла длиной: 65 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

	17. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 51 мм, колющая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 18. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,2 (10-0), длина нити: 30 см, одна игла длиной: 5,5 мм, шпательная повышенного качества, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 19. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм, режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 20. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм, режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 21. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 22. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 60 мм, режущая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 24 шт. 23. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 60 мм, режущая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 24. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 25. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 26. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм, обратно-режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
--	---

27. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
28. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
29. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
30. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
31. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
32. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
33. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
34. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
35. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
36. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

37. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
38. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
39. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
40. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
41. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
42. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
43. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
44. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
45. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
46. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

47. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
48. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
49. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
50. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
51. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
52. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
53. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
54. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
55. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
56. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

57. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
58. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
59. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
60. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
61. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
62. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
63. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
64. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
65. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
66. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

67. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
68. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 20 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
69. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 20 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
70. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
71. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
72. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
73. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
74. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
75. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
76. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

77. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
78. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
79. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
80. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
81. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
82. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
83. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
84. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
85. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
86. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

87. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
88. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
89. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
90. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
91. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
92. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
93. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
94. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
95. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
96. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 120 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

97. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
98. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
99. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
100. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
101. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
102. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
103. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
104. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
105. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
106. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.


107. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
108. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
109. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
110. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 11 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
111. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
112. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
113. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
114. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
115. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
116. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

117. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 11 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
118. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
119. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 37 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
120. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
121. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
122. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
123. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
124. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
125. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
126. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

127. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
128. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
129. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.
130. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
131. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
132. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
133. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
134. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
135. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.
136. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.

2.1 Назначение медицинского изделия	Материал шовный Surgipro и Surgipro II предназначены для применения в общей хирургии для ушивания мягких тканей и/или лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмо- и нейрохирургии.
2.2 Принципы действия медицинского изделия	Полипропиленовый шовный материал Surgipro вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, за которой следует постепенная инкапсуляция шва фиброзной соединительной тканью. Полипропиленовый шовный материал Surgipro не рассасывается, и случаев существенного изменения прочности на разрыв in vivo не отмечено.
3. Показания и Противопоказа ния к применению медицинского изделия	Показания к применению Полипропиленовый шовный материал Surgipro показан к применению в общей хирургии для сшивания мягких тканей и/или лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии и в офтальмологии. Противопоказания Неизвестны.
4. Информа ция о потенциальных потребителях медицинского изделия	Изделие предназначено для использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Пользование разрешается лишь под руководством или под наблюдением специально обученного врачебного персонала. За правильность выполнения хирургических процедур и применения стерильных методов несет ответственность врач. Каждый врач должен использовать изделие согласно профессиональному медицинскому опыту и полученным навыкам.
5. Описан ие основных функциональн ых элементов медицинского изделия, которое может сопровождатьс я схемами, фотографическ ими изображениями , рисунками, диаграммами и	Монофиламентный шовный материал Surgipro (бесцветный или окрашенный) — это инертные, нерассасывающиеся стерильные нити, изготавливаемые из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена. Для увеличения заметности шовный материал окрашен в синий цвет. Полипропиленовый шовный материал Surgipro из соответствует всем требованиям Фармакопеи США (United States Pharmacopeia, USP) и Европейской Фармакопеи (European Pharmacopeia, EP) к нерассасывающимся хирургическим шовным материалам за исключением размеров 7-0 и 8-0, которые отличаются от максимального диаметра по USP и EP на 0,007 мм. <u>Основные функциональные элементы медицинского изделия:</u>

иными
пояснениями

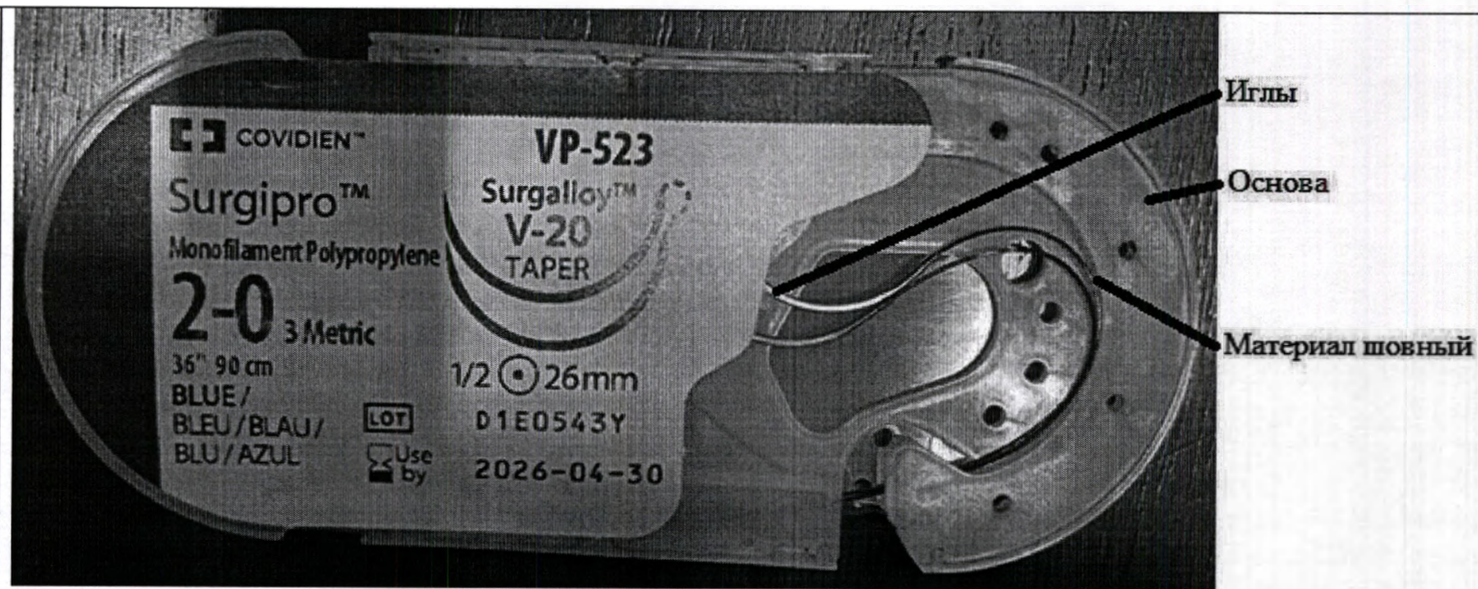

6. Описан
ие составных
частей (узлов)
медицинского
изделия (при
наличии)

Технические характеристики. Допустимые отклонения: $\pm 10\%$, где не указано иное

Типы игл	
	Конусная
	Режущая
	Обычная режущая
	Конусная режущая

	Тупоконечная
	Тупоконечная конусная
	Проникающая конусная
	Лопатообразная (шпатель)
	Лопатообразная (шпатель) повышенного качества
	Лопатообразная (шпатель), обратная
	Многоцелевая
	С алмазным наконечником
	Режущая косметическая (X-Cosmetic)
	Петля
	Съемная игла
Твердость игл: HV 4900-6475 Н/мм ² ;	

Параметры шероховатости поверхностей игл: на стержне и острие – Ra 0,32 мкм, в зоне крепления шовной нити Rz 20 мкм;
Длина колющей части иглы, не более: 0,025 мм;
Ширина режущих ребер игл с трехгранным и шпательным острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не более: 0,025 мм;
Отклонение от прямолинейности прямых игл: $\pm 2\%$ от длины иглы;
Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, не более: 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления;
Полный установленный ресурс игл, не менее: 25 проколов;
Полный средний ресурс игл, не менее: 50 проколов.

Цвет для всех вариантов исполнения: синий.
Варианты исполнения с метрическим размером 4(1):
Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 27,0 Н;
Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 18,0 Н;
Диаметр по ГОСТу: 0,400-0,499 мм;

	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, $\pm 2\%$	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол- во игл
1.	16. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 240 см, одна игла длиной: 65 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	240	65	колющая	$\frac{1}{2}$ окружн ости (180°)	1
2.	15. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 100 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	100	40	колющая	$\frac{1}{2}$ окружн ости (180°)	1

	3.	10. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 90 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	27	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
	4.	12. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 37 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	37	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
	5.	14. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	40	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 3,5 (0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 22,0 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 15,0 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,350-0,399 мм;							
		Номер варианта исполнения	Длина нити, см, $\pm 2\%$	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол-во игл
	6.	7. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	26	колюще-режущая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	2

7.	3. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	26	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
8.	9. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	27	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
9.	11. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 37 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	37	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
10.	13. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	40	колющая	$\frac{1}{2}$ окружности (180°)	1
11.	33. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	39	обратно-режущая	$\frac{3}{8}$ окружности (135°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 3 (2-0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 15,0 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 11,0 Н;						

Диаметр по ГОСТу: 0,300-0,349мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол- во игл
12.	1. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	26	колющая я	½ окружн ости (180°)	2
13.	4. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 37 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	37	колющая я	½ окружн ости (180°)	2
14.	6. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	26	колюще - режущая	½ окружн ости (180°)	2
15.	17. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 51 мм, колющая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	51	колющая я	прямая	2
16.	2. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии	75	26	колющая я	½ окружн ости (180°)	1

		SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
17.	5.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 30 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	30	колющая	½ окружности (180°)	1
18.	8.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	27	колющая	½ окружности (180°)	1
19.	23.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 60 мм, режущая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	60	режущая	прямая	1
20.	31.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	26	обратно-режущая	3/8 окружности (135°)	1
21.	32.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	39	обратно-режущая	3/8 окружности (135°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 2 (3-0):							

Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 9,0 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 6,8 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,200-0,249 мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол- во игл
22.	96. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 120 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	120	26	колющая	1/2 окружн ости (180°)	2
23.	54. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая	1/2 окружн ости (180°)	2
24.	55. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая	1/2 окружн ости (180°)	2
25.	94. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	26	колющая	1/2 окружн ости (180°)	2

26.	95. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	22	колющая	3/8 окружности (135°)	2
27.	114. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	22	колющая	1/2 окружности (180°)	2
28.	119. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 37 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	37	колющая	1/2 окружности (180°)	2
29.	130. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	26	колюще - режущая	1/2 окружности (180°)	2
30.	22. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 60 мм, режущая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 24 шт.	75	60	режущая	прямая	1
31.	25. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла	75	39	обратно -	3/8 окружности	1

	длинной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.			режущая	(135°)	
32.	28. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	30	обратно - режущая	3/8 окружности (135°)	1
33.	112. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	22	колющая	½ окружности (180°)	2
34.	118. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	26	колющая	½ окружности (180°)	1
35.	21. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	19	обратно - режущая	3/8 окружности (135°)	1
36.	27. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая	45	19	обратно - режущая	3/8 окружности (135°)	1

	сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
37.	30. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	24	обратно - режущая	3/8 окружн ости (135°)	1
38.	132. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	24	обратно - режущая	3/8 окружн ости (135°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 1,5 (4-0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 5,0 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 4,5 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,150-0,199 мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол- во игл
39.	58. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая	3/8 окружн ости (135°)	2

40.	59. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	3/8 окружности (135°)	2
41.	68. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 20 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	20	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
42.	69. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 20 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	20	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
43.	86. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
44.	87. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
45.	91. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии	90	26	колющая я	1/2 окружности (180°)	2

		SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
46.	113.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	22	колющая	1/2 окружности (180°)	2
47.	120.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	22	колющая	3/8 окружности (135°)	2
48.	126.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колюще - режущая	3/8 окружности (135°)	2
49.	128.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колюще - режущая	1/2 окружности (180°)	2
50.	56.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии	75	17	колющая	1/2 окружности (180°)	1

		SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
51.	57.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	17	колющая	1/2 окружности (180°)	1
52.	70.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
53.	71.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
54.	74.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	17	колющая	3/8 окружности (135°)	1
55.	75.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	17	колющая	3/8 окружности (135°)	1
56.	92.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический	75	26	колющая	1/2 окружн	2

		размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.				ости (180°)	
57.	116.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	22	колющая	1/2 окружн ости (180°)	1
58.	89.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	1/2 окружн ости (180°)	2
59.	24.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	24	обратно - режущая	3/8 окружн ости (135°)	1
60.	29.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	19	обратно - режущая	3/8 окружн ости (135°)	1
61.	133.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла	45	19	обратно -	3/8 окружн ости	1

	длинной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.			режущая	(135°)	
62.	136. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	13	обратно-режущая	3/8 окружности (135°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 1 (5-0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 3,0 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 2,3 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,100-0,149 мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол-во игл
63.	40. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
64.	41. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2

65.	48. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	3/8 окружности (135°)	2
66.	49. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	3/8 окружности (135°)	2
67.	82. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
68.	83. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
69.	93. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	26	колющая я	1/2 окружности (180°)	2
70.	127. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы	90	17	колюще -	1/2 окружн	2

		длиной: 17 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.			режущая	ости (180°)	
71.	131.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	13	колющая	½ окружности (180°)	2
72.	38.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
73.	39.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
74.	60.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	1
75.	61.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	1

76.	64. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	17	колющая	1/2 окружности (180°)	1
77.	65. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	17	колющая	1/2 окружности (180°)	1
78.	80. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	5 шт. по 75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
79.	81. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	5 шт. по 75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
80.	98. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колюще-режущая	3/8 окружности (135°)	2
81.	99. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы	75	13	колющая	1/2 окружн	2

	длинной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.				ости (180°)	
82.	62. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длинной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	3/8 окружн ости (135°)	2
83.	63. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длинной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	3/8 окружн ости (135°)	2
84.	90. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длинной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	1/2 окружн ости (180°)	2
85.	19. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длинной: 16 мм, режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	16	режущая	3/8 окружн ости (135°)	1
86.	20. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длинной: 16 мм, режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	45	16	режущая	3/8 окружн ости (135°)	1

87.	135. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	13	обратно - режущая	3/8 окружности (135°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 0,7 (6-0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 1,5 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 1,7 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,070-0,099 мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол- во игл
88.	52. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	13	колющая я	3/8 окружности (135°)	2
89.	53. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	13	колющая я	3/8 окружности (135°)	2
90.	76. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии	90	17	колющая я	1/2 окружности (180°)	2

		SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
91.	77.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	90	17	колющая	1/2 окружности (180°)	2
92.	34.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
93.	35.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
94.	36.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	9	колющая	3/8 окружности (135°)	2
95.	37.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	9	колющая	3/8 окружности (135°)	2

96.	66. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	1
97.	67. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	3/8 окружности (135°)	1
98.	101. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колюще- режущая	3/8 окружности (135°)	2
99.	102. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	13	колющая	1/2 окружности (180°)	2
100.	117. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 11 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	11	колющая	3/8 окружности (135°)	2

101.	44. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	9	колющая я	3/8 окужн ости (135°)	2
102.	45. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	9	колющая я	3/8 окужн ости (135°)	2
103.	46. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая я	3/8 окужн ости (135°)	2
104.	47. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая я	3/8 окужн ости (135°)	2
105.	84. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	5 шт. по 60	13	колющая я	3/8 окужн ости (135°)	2
106.	85. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы	5 шт. по 60	13	колющая я	3/8 окужн ости	2

		длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.				(135°)	
107.	97.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2
108.	100.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	1/2 окружности (180°)	2
109.	110.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 11 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	11	колющая	3/8 окружности (135°)	2
110.	111.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	10	колющая	1/2 окружности (180°)	2
111.	26.	Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	16	обратно-режущая	3/8 окружности (135°)	1

112.	134. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	13	обратно - режущая	3/8 окружн ости (135°)	1
Варианты исполнения с метрическим размером 0,5 (7-0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 1,0 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 0,80 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,050-0,069 мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол- во игл
113.	42. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	9	колющая	3/8 окружн ости (135°)	2
114.	43. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	9	колющая	3/8 окружн ости (135°)	2
115.	78. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии	5 шт. по 75	9	колющая	3/8 окружн ости (135°)	2

		SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.					
116.	79.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	5 шт. по 75	9	колющая	3/8 окружности (135°)	2
117.	109.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2
118.	121.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	75	10	колющая	3/8 окружности (135°)	2
119.	50.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	9	колющая	3/8 окружности (135°)	2
120.	51.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	1 шт. 60 или 5 шт. по 60	9	колющая	3/8 окружности (135°)	2

121.	72. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
122.	73. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	13	колющая	3/8 окружности (135°)	2
123.	88. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	5 шт. по 60	9	колющая	3/8 окружности (135°)	2
124.	103. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2
125.	104. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	2 шт. по 60	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2

126.	125. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	6	колющая	3/8 окружности (135°)	2
Варианты исполнения с метрическим размером 0,4 (8-0): Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, не менее 0,60 Н; Усилие отрыва шовного материала от иглы, не менее 0,50 Н; Диаметр по ГОСТу: 0,040-0,049 мм;						
	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол-во игл
127.	129. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	75	6	колющая	3/8 окружности (135°)	2
128.	105. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2
129.	108. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии	60	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2

		SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
130.	115.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	10	колющая	3/8 окружности (135°)	2
131.	124.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	60	6	колющая	3/8 окружности (135°)	2
132.	106.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	2 шт. по 45	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2
133.	107.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	8	колющая	3/8 окружности (135°)	2
134.	122.	Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии	2шт. по 45	6	колющая	3/8 окружности (135°)	2

	SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.					
135.	123. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.	45	6	колющая	3/8 окружности (135°)	2

Вариант исполнения с метрическим размером 0,2 (10-0):

Разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов, **не менее 0,10 Н;**

Усилие отрыва шовного материала от иглы, **не менее 0,14 Н;**

Диаметр по ГОСТу: **0,020-0,029мм;**

	Номер варианта исполнения	Длина нити, см, ±2%	Длина иглы, мм	Тип иглы	Степень изгиба иглы, °	Кол-во игл
136.	18. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,2 (10-0), длина нити: 30 см, одна игла длиной: 5,5 мм, шпательная повышенного качества, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт.	30	5,5	шпательная повышенного качества	1/2 окружности (180°)	1

Сведения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14630:

i) внутренние соединения в имплантате и их влияние на эксплуатационные характеристики:

Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, за которой следует постепенная

инкапсуляция шва фиброзной соединительной тканью. Материал шовный не рассасывается, и случаев существенного изменения прочности на разрыв не отмечено.

j) взаимодействие между имплантатом и тканями организма, в особенности в отношении фиксации, соединения и условий на поверхности имплантата:

Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения предназначен для внутренней имплантации пациенту. Игла, входящая в состав комплекта поставки, используется для проникновения в ткани пациента, облегчая размещение швов в ткани. Когда процедура завершена, игла и лишняя нить должны быть удалены и утилизированы в соответствии с соответствующими процедурами обращения с острыми предметами и биологическими отходами. Это предотвращает контакт с другими людьми.

Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения может поставляться с укрепляющими подкладками из ПТФЭ (политетрафторэтилена) для использования в качестве прокладки между зоной наложения шва и поверхностью ткани в целях увеличения области, несущей нагрузку. Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения также поставляется в вариантах с утолщением конца в виде бусины или диска. Утолщение предназначено для крепления конца нити при внутрикожном шве или при наложении шва на сухожилия.

m) физическое и химическое воздействие организма человека и внешних факторов окружающей среды на имплантат:

После имплантации существенного изменения прочности на разрыв не отмечено. Продолжительный контакт шовного материала, как и любого другого инородного тела, с солевыми растворами может привести к образованию конкрементов.

o) возможность имплантировать и, если применимо, извлекать или заменять имплантат:

Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, в вариантах исполнения предназначен для постоянной имплантации, он не поглощается, и не существуют значительного изменения удержания прочности. Повторное использование, повторная обработка и/или повторная стерилизация данного изделия могут стать причиной контаминации, инфицирования пациента, получения пациентом травмы, вызывающей необратимое ухудшение состояния здоровья, или травмы, несущей угрозу жизни.

	р) возможность определять положение и ориентацию имплантата посредством радиологических и других сканирующих процедур: Не применимо.					
7. Описание основных принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием (при наличии)	Не применимо					
8. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента	Наименование изделия или детали и принадлежности (исследуемые)	Назначение изделия (область медицины, где применяется изделие)	Материалы, применяемые при изготовлении	Вид контакта с организмом (по ГОСТ ISO 10993-1-2011)	Класс потенциального риска применения (по ГОСТ 31508-2012)	Метод стерилизации (если образец стериличен)

(телом человека)	1. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 2. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 3. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на	Материал шовный Surgipro и Surgipro II предназначены для применения в общей хирургии и для ушивания мягких тканей и/или лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмо- и	Материал шовный: Изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена Основа: Полиэтилен высокой плотности Иглы: Нержавеющая сталь Покрывание иглы: Силикон Внутренняя первичная упаковка: Полиэтилен Адгезив Полиэстер, покрытый силиконом	Материал шовный: Постоянный контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма Основа: Кратковременный контакт с неповрежденной кожей Иглы: Кратковременный контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма Внутренняя первичная упаковка: Кратковременный контакт с неповрежденной кожей	3	Стерилизация оксидом этилена
------------------	--	---	--	--	---	--

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 6. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 7. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 90 см, две	нейрохирургии.	Первичная упаковка: Верхняя часть: Полиэтилен высокой плотности Нижняя часть: Пленка с черным красителем	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей		
--	--	----------------	--	--	--	--

	иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 18. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,2 (10-0), длина нити: 30 см, одна игла длиной: 5,5 мм, шпательная повышенного качества, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 19. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм, режущая, $\frac{3}{8}$ окружности, нержавеющая сталь серии					
--	---	--	--	--	--	--

	SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 21. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 34. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по					
--	---	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 36. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 38. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	---	--	--	--	--	--

	40. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 42. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 44. Материал шовный Surgipro II					
--	---	--	--	--	--	--

	монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 46. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 48. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на					
--	--	--	--	--	--	--

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 50. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 52. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер					
--	---	--	--	--	--	--

	(условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 54. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 56. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна					
--	---	--	--	--	--	--

	игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 58. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 60. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности,					
--	--	--	--	--	--	--

	нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 62. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 64. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с					
--	--	--	--	--	--	--

	инструкцией по применению, не более 36 шт. 66. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 70. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по					
--	--	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 72. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 74. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	---	--	--	--	--	--

	76. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 78. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 80. Материал шовный Surgipro II					
--	---	--	--	--	--	--

	монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 82. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 84. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на					
--	---	--	--	--	--	--

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 86. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 88. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер					
--	--	--	--	--	--	--

	(условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 89. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 90. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две					
--	---	--	--	--	--	--

	иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 91. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 92. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности,					
--	---	--	--	--	--	--

	нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 93. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 94. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с					
--	---	--	--	--	--	--

	инструкцией по применению, не более 36 шт. 95. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющей сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 96. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 120 см, две иглы длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющей сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по					
--	--	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 98. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 99. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	---	--	--	--	--	--

	100. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 101. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 102. Материал шовный Surgipro II					
--	--	--	--	--	--	--

	монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 103. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 104. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на					
--	--	--	--	--	--	--

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 106. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 107. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер					
--	--	--	--	--	--	--

	(условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 108. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 109. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две					
--	--	--	--	--	--	--

	иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 110. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 11 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 111. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 1/2 окружности,					
--	--	--	--	--	--	--

	нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 112. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 113. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с					
--	---	--	--	--	--	--

	инструкцией по применению, не более 36 шт. 114. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 115. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по					
--	---	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 116. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 22 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 117. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 11 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	---	--	--	--	--	--

	118. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 120. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 22 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 121. Материал шовный Surgipro II					
--	--	--	--	--	--	--

	монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 10 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 122. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 123. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на					
--	--	--	--	--	--	--

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 45 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 124. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 125. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер					
--	--	--	--	--	--	--

	(условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 126. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 127. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две					
--	--	--	--	--	--	--

	иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 128. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 129. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 6 мм, колющая, 3/8 окружности,					
--	--	--	--	--	--	--

	нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 130. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 26 мм, колюще-режущая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 131. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с					
--	--	--	--	--	--	--

	инструкцией по применению, не более 36 шт. 132. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 133. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по					
--	---	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 134. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 135. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	--	--	--	--	--	--

	136. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 13 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии SURGALLOY, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
	4. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 37 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 5. Материал шовный Surgipro монофиламентный		Материал шовный: Изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена Основа: Полиэтилен высокой плотности Иглы: Нержавеющая сталь Покрывание иглы: Силикон	Материал шовный: Постоянный контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма Основа: Кратковременный контакт с неповрежденной кожей		

	нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 30 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 8. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 9. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0),		Внутренняя первичная упаковка: Полиэтилен Адгезив Полиэстер, покрытый силиконом	Иглы: Кратковременный контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма Внутренняя первичная упаковка: Кратковременный контакт с неповрежденной кожей		
			Первичная упаковка: Верхняя часть: Полиэтилен высокой плотности Нижняя часть: Пленка с черным красителем	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей		

	длина нити: 75 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 10. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 90 см, одна игла длиной: 27 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 11. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 37 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющая сталь серии					
--	---	--	--	--	--	--

	455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 12. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 37 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющей сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 13. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, ½ окружности, нержавеющей сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	--	--	--	--	--	--

	14. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 15. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 100 см, одна игла длиной: 40 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 16. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена,					
--	---	--	--	--	--	--

	синий, метрический размер (условный номер): 4 (1), длина нити: 240 см, одна игла длиной: 65 мм, колющая, $\frac{1}{2}$ окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 17. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 51 мм, колющая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 20. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм,					
--	--	--	--	--	--	--

	режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 22. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 60 мм, режущая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 24 шт. 23. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 60 мм, режущая, прямая, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по					
--	---	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 24. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 25. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 26. Материал шовный Surgipro монофиламентный					
--	--	--	--	--	--	--

	нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 16 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющей сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 27. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющей сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 28. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0),					
--	--	--	--	--	--	--

	длина нити: 75 см, одна игла длиной: 30 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 29. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 19 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 30. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 45 см, одна игла длиной: 24 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая					
--	---	--	--	--	--	--

	сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 31. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 26 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 32. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3 (2-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	--	--	--	--	--	--

	33. Материал шовный Surgipro монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 3,5 (0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 39 мм, обратно-режущая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 68. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 20 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 119. Материал шовный Surgipro II монофиламентный					
--	--	--	--	--	--	--

	нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 37 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии 455, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
	35. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 37. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на		Материал шовный: Изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена Основа: Полиэтилен высокой плотности Иглы: Нержавеющая сталь Внутренняя первичная упаковка: Полиэтилен Адгезив Полиэстер, покрытый силиконом	Материал шовный: Постоянный контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма Основа: Кратковременный контакт с неповрежденной кожей Иглы: Кратковременный		

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 39. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 41. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер			контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма Внутренняя первичная упаковка: Кратковременный контакт с неповрежденной кожей		
			Первичная упаковка: Верхняя часть: Полиэтилен высокой плотности Нижняя часть: Пленка с черным красителем	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей		

	(условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 43. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7- 0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 45. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6- 0), длина нити: 60 см, две					
--	---	--	--	--	--	--

	иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 47. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 49. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности,					
--	--	--	--	--	--	--

	нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 51. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 53. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с					
--	--	--	--	--	--	--

	инструкцией по применению, не более 36 шт. 55. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 2 (3-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющей сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 57. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющей сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по					
--	--	--	--	--	--	--

	применению, не более 36 шт. 59. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 61. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт.					
--	---	--	--	--	--	--

	63. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 65. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 67. Материал шовный Surgipro II					
--	---	--	--	--	--	--

	монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 69. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 20 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 71. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на					
--	--	--	--	--	--	--

	основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 73. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 75. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер					
--	--	--	--	--	--	--

	(условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 75 см, одна игла длиной: 17 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 77. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 79. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,5 (7-0), длина нити: 75 см, две					
--	---	--	--	--	--	--

	иглы длиной: 9 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 81. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 75 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 83. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1 (5-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности,					
--	--	--	--	--	--	--

	нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 85. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 13 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 12 шт. 87. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 1,5 (4-0), длина нити: 90 см, две иглы длиной: 17 мм, колющая, 1/2 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с					
--	---	--	--	--	--	--

	инструкцией по применению, не более 36 шт. 97. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,7 (6-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по применению, не более 36 шт. 105. Материал шовный Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена, синий, метрический размер (условный номер): 0,4 (8-0), длина нити: 60 см, две иглы длиной: 8 мм, колющая, 3/8 окружности, нержавеющая сталь серии Cardiopoint, в составе с инструкцией по					
--	---	--	--	--	--	--

применению, не более 36 шт.			
-----------------------------	--	--	--

9. Данные о маркировке медицинского изделия и его упаковке

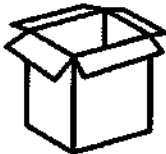
The image displays two boxes of COVIDIEN Surgipro needles. The left box is a standard white box with the COVIDIEN logo and a list of needle types and sizes in multiple languages. The right box is a black box with the COVIDIEN logo and 'Surgipro™ Monofilament Polypropylene' text. It features a large '2-0 3 Metric' label, a '30" 75 cm BLUE' label, and a 'V-30 TAPER' label. The box also shows the needle's dimensions '1/2 • 30 mm' and a lot number 'LOT D1F0556Y'. The expiration date '2026-05-31' is also visible. The box is labeled '36' and '36'.

Рисунок 9.1. Пример вторичной упаковки



Рисунок 9.2. Пример вторичной упаковки

Обозначения символов	Символ	Описание
		Дата изготовления
		Использовать до
		Код партии
		Номер по каталогу
		Стерилизация оксидом этилена
		Запрет на повторное применение
		Только по рецепту врача
		Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам
		Внимание! Ознакомьтесь с сопроводительными документами

			Возможность вторичной переработки тарных и упаковочных материалов															
			Количество в упаковке															
Проект этикетки на русском языке	Информация на русскоязычном стикере Для продажи на территории Российской Федерации финальная упаковка сопровождается дополнительным стикетром. Изделия поставляются со стикером, который может содержать следующую информацию: Название медицинского изделия на русском языке указывается в соответствии с регистрационным удостоверением медицинского изделия; Название завода производителя; Страна происхождения; Код UPN (уникальный код продукта); Код CFN (номер модели); Дата и номер Регистрационного удостоверения; Предупредительные и информирующие знаки и надписи (если применимо). Образец стикера <table border="1"> <tr> <td rowspan="7">Нетоксично Апирогенно Стерильно</td><td colspan="2">Название медицинского изделия</td></tr> <tr> <td>Производитель:</td><td>Код UPN</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Код CFN</td></tr> <tr> <td colspan="2">Представитель производителя в РФ:</td></tr> <tr> <td colspan="2">Регистрационное Удостоверение № ____ от ____</td></tr> <tr> <td>Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку</td><td>См. Инструкцию См. символы на упаковке</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td></tr> </table>			Нетоксично Апирогенно Стерильно	Название медицинского изделия		Производитель:	Код UPN	Страна происхождения:	Код CFN	Представитель производителя в РФ:		Регистрационное Удостоверение № ____ от ____		Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке		
Нетоксично Апирогенно Стерильно	Название медицинского изделия																	
	Производитель:	Код UPN																
	Страна происхождения:	Код CFN																
	Представитель производителя в РФ:																	
	Регистрационное Удостоверение № ____ от ____																	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке																
10. Ссылки на предыдущие модификации медицинского изделия или	Не применимо																	

подобные модификации медицинских изделий	
11. Информ ация в соответствии с данными государственног о реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии	Не применимо.
12. Описани е метода стерилизации	Метод стерилизации: этиленоксид. Гарантированный уровень обеспечения стерильности 10^{-6} .
13. Информ ация о процессе проектирования, разработке и валидации программного обеспечения, используемого в готовом медицинском изделии	Не применимо
14. Требова ния к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия	Не применимо
15. Порядок и условия	Утилизируйте медицинское изделие в соответствии с требованиями национального законодательства и требованиями к использованию биологически опасных изделий медицинского назначения.

утилизации или уничтожения медицинского изделия	Утилизация изделий должна проводиться согласно СанПиН 2.1.3684-21 и должны утилизироваться соответствующим образом. Класс опасности медицинских отходов на территории РФ : Класс медицинских отходов неиспользованного изделия: А Класс медицинских отходов использованного изделия: Б
16. Сведения о производителе медицинского изделия (наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес, телефон, адрес места производства)	Разработчик/ Covidien llc 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048, U.S.A. Производитель Covidien llc., 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048, U.S.A. Тел. 1-800-635-5267, info@covidien.com Уполномоченный представитель производителя ООО «Медтроник», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Tel: (495) 580-73-77, info.russia@medtronic.ru Юридическое лицо, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение ООО «Медтроник», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10/ Tel: (495) 580-73-77, info.russia@medtronic.ru Адреса мест производства медицинского изделия 1. Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.), Zona Franca de San Isidro, Carretera San Isidro Km 17, Santo Domingo, Dominican Republic 2. Covidien 60 Middletown Avenue, North Haven CT 06473, USA
17. Классификация медицинского изделия	Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 3; Вид контакта медицинского изделия: постоянный контакт с внутренней средой организма; Стерильность: стерильно
18. Побочные эффекты (возможные осложнения)	НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ К нежелательным реакциям, которые связаны с использованием данного изделия, относятся: раскрытие раны, образование конкрементов при продолжительном контакте с солевыми растворами, повышенная бактериальная инфицируемость, минимальная острая воспалительная реакция и кратковременное местное раздражение.
19. Предупреждения и меры	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1. Продолжительный контакт шовного материала, как и любого другого инородного тела, с солевыми растворами может привести к образованию конкрементов.

предосторожно сти	2. Повторное использование, повторная обработка и/или повторная стерилизация данного изделия могут стать причиной контаминации, инфицирования пациента, получения пациентом травмы, вызывающей необратимое ухудшение состояния здоровья, или травмы, несущей угрозу жизни. Данное изделие не подлежит повторному использованию, повторной обработке и повторной стерилизации. Изделие стерильно, если его упаковка не вскрыта и не повреждена. Следует удалить в отходы неиспользованный шовный материал, если упаковка была вскрыта. Использованные инструменты следует удалить в отходы в соответствии с действующими в учреждении конечного пользователя требованиями к удалению медицинских и биологических отходов. Хранить при комнатной температуре. Избегать длительного воздействия повышенных температур. 3. Хирурги, использующие полипропиленовый нерассасывающийся шовный материал Surgipro для закрытия ран, должны хорошо знать методику и технику наложения таких шовных материалов, поскольку риск раскрытия раны зависит от анатомической области и типа шовного материала. 4. При дренаже и сшивании загрязненных или инфицированных ран должны применяться приемлемые в подобных случаях хирургические методы. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1. При обращении с этим и любым другим шовным материалом необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить нить. Не пережимайте и не перегибайте шовный материал во время использования таких хирургических инструментов, как пинцеты или иглодержатели. 2. Для обеспечения надежности узлов необходимо придерживаться общепринятой хирургической техники завязывания плоского прямоугольного узла с дополнительной петлей, если это необходимо по условиям операции и по мнению хирурга. Использование дополнительных переплетений в особенности оправдано в случае завязывания узла на монофиламентной нити.	
20. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки	Не применимо. Изделия поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования.	
21. Срок годности	5 лет.	
22. Условия эксплуатации	Параметр	Значение
	Номинальное значение температуры, °C	От +32 до + 42
	Номинальное значение относительной влажности, %	До 100%
	Атмосферное давление, гПа	От 700 до 1060
23. Условия транспортирования и хранения	Условия транспортировки	
	Температура, °C	От +15 до + 54
	Влажность, %	80 при 25°C
	Атмосферное давление, гПа	От 700 до 1060
	Условия хранения	

	Температура, °C		От +15 до + 30
	Влажность, %		80 при 25°C
	Атмосферное давление, гПа		От 700 до 1060
24. Требования к монтажу	Не применимо		
25. Перечень предоставленных производителем (изготовителем) медицинского изделия сведений, ключей, паролей доступа, программ, необходимых для монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания медицинского изделия	Не применимо		
26. Гарантийные обязательства	Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик, срок сохранения стерильности, гарантию сохранности целостности упаковки при правильной транспортировке, эксплуатации и хранении изделия на протяжении 5 лет с момента стерилизации изделия. Данная гарантия ограничивается заменой изделия на исключительное усмотрение производителя, любых подобных компонентов, о неисправности которых было заявлено, и только в тех случаях, когда подобная заявка была признана достоверной в результате проверки, проведенной производителем. Данная гарантия не распространяется на какие-либо компоненты или элементы изделия, подверженные ненадлежащему использованию, ненадлежащей эксплуатации, случайному повреждению или же несанкционированному ремонту, а также не покрывает стоимость или расходы на ремонт. Производитель не несет ответственности перед покупателем или иными лицами за утрату используемого оборудования или же возможный косвенный, случайный или вторичный ущерб. При получении изделия в поврежденной или вскрытой упаковке рекомендуется связаться с региональным представителем компании Производителя для уточнений дальнейших действий по замене или возврату изделия. В случае возникновения неисправностей или некорректной работы, необходимо связаться с представителем компании Медтроник для уточнения возможности ремонта или замены.		
27. Перечень	Стандарт	Название стандарта	
	EN 1041: 2008	Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий	

национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие	EN ISO 11607-1: 2009 + A1:2014	Упаковка для термически стерилизованных медицинских устройств. Часть 1. Требования к материалам, Стерильные барьерные системы и упаковочные системы
	EN ISO 11135: 2014	Стерилизация продуктов здравоохранения - оксид этилена. Часть 1. Требования к разработке, валидации и рутинному контролю процесса стерилизации медицинских изделий
	EN ISO 11607-2: 2006 + A1:2014	Упаковка для термически стерилизованных медицинских устройств. Часть 2. Требования к валидации для процесса формирования, уплотнения и сборки
	EN 556-1: 2001 +AC:2006	Стерилизация медицинских приборов - Требования к медицинским устройствам, которые должны обозначаться как «Стерильные» Часть 1 - требования к терминально стерилизованным медицинским устройствам
	EN ISO 11737-1:2006/AC:2009	Стерилизация медицинских приборов - Микробиологические методы - Часть 1: Определение популяции микроорганизмов на продуктах
	EN ISO 11737-2: 2009	Стерилизация медицинских устройств - Микробиологические методы. Часть 2. Испытания стерильности, выполняемые при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации
	EN ISO 10993-7: 2008 +AC:2009	Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 7: Остатки стерилизации оксида этилена
	IEC 62366: 2015	Медицинские устройства.
	EN ISO 10993-1: 2009 +AC:2010	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 1: Оценка и испытания в рамках процесса менеджмента риска
	EN ISO 14971: 2012	Медицинские изделия – Применение управления рисками к медицинским изделиям
	EN ISO 13485:2016	Медицинские изделия – Системы управления качеством – Требования для регулирующих целей
	EN ISO 15223-1: 2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования
	EN ISO 10993-3: 2014	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 3: Тесты на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность
	EN ISO 10993-4: 2017	Биологическая оценка медицинских устройств – Часть 4: Выбор тестов для взаимодействия с кровью
	EN ISO 10993-5: 2009	Биологическая оценка медицинских устройств – Часть 5: Тесты на цитотоксичность In Vitro
	EN ISO 10993-5: 2009	Биологическая оценка медицинских устройств – Часть 5: Тесты на цитотоксичность In Vitro
	EN ISO 10993-6: 2016	Биологическая оценка медицинских устройств – Часть 6: Тесты на местные эффекты после имплантации
	EN ISO 10993-10:2013	Биологическая оценка медицинских устройств – Часть 10: Тест на раздражение и сенсибилизацию кожи
	EN ISO 10993-11:2017	Биологическая оценка медицинских устройств Часть 11: Тесты на системную токсичность
	EN ISO 10993-12:2012	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 12: Подготовка образцов и справочные материалы
	EN ISO 10993-17:2009	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 17: Установление допустимых пределов для выщелачиваемых веществ
	EN ISO 10993-18:2009	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 18: Химическая характеристика материалов
	EN ISO 14630: 2012	Неактивные хирургические имплантаты – Общие требования

	ISO 14644-1: 2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 1: Классификация или воздушные элементы
	ISO 14644-2 2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 2: Спецификации для тестирования и мониторинга для подтверждения постоянного соответствия стандарту ISO 14644-1
	ISO 14644-3 2005	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды Часть 3: Методы испытаний
28. Служба работы с клиентами	По всем вопросам, включая жалобы на продукцию, ремонт и техобслуживание, обращаться к Уполномоченному Представителю в Российской Федерации: ООО «Медтроник» 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41 Тел.: (495) 580-73-77, Факс: (495) 580-73-78, info.russia@medtronic.ru	



COVIDIEN

УТВЕРЖДАЮ

«Ковидиен ллс» (Covidien llc), США
Старший специалист регуляторного отдела
(должность)

Мегха Пател (Megha Patel)
(имя)

<подписано>
(подпись)

19.09.2022
«день» месяц (цифрами)

«Приложение к эксплуатационной документации - Инструкция по применению» для подачи в Российской Федерации

Материал шовный Surgipro и Surgipro II монофиламентный нерассасывающийся на основе полипропилена

Официальный производитель:

«Ковидиен ллс» (Covidien llc), расположенная по адресу: 15 Гэмпшир Стрит, Мэнсфилд, штат Массачусетс 02048, США (15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA)

ШТАТ МИННЕСОТА
ОКРУГ Анока

Подписано и удостоверено в моем
присутствии

23

Сентября 2022 г.

<подписано>

Нотариус
Срок действия моих полномочий
истекает 31 января 2026 г.



«КОВИДИЕН»

15 ГЭМПШИР СТРИТ
МЭНСФИЛД, МАССАЧУСЕТС 02048
США

[508]261-8000 [T]

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Искусных Дмитрием Александровичем

Российская Федерация

Город Москва

Восьмого декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Алехин Евгений Владимирович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Искусных Дмитрия Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 57/171-н/77-2022-16-1819.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Е.В.Алехин



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 123 лист (-а,-ов)