

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на медицинское изделие
Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018:
для общепольничного оснащения

2018

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на наборы мебели медицинской (далее - наборы мебели), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, необходимого медицинского инструмента, проведения лечебных процедур, раздачи лекарств, размещения принадлежностей пациентов и др.

- 1. **Назначение изделия:** Предназначена для оборудования лечебных учреждений.
- 2. **Область распространения:** широкого применения.
- 3. **Комплектация:**
 - 1. Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018 для общебольничного оснащения

Вариант комплектации 1:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Стол пеленальный медицинский, варианты: СП-02, СП-03;
 - 1. Паспорт ПС-СП-02 – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СП-03 – 1 шт.

Вариант комплектации 2:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Стол пеленальный медицинский, варианты: СП-01, СП-02;
 - 1. Паспорт ПС-СП-01 – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СП-02 – 1 шт.

Вариант комплектации 3:

-

Показания к применению

Наборы мебели медицинской предназначены для оборудования лечебных учреждений с целью обеспечения их функциональности и выделения места для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, необходимого медицинского инструмента, проведения лечебных процедур, раздачи лекарств, размещения принадлежностей пациентов и др.

Противопоказания к применению


Мебель противопоказаний к применению не имеет.

4. Технические характеристики:

Масса и габаритные размеры изделий.

Обозначение	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
СП-01	850	700	980	40
СП-02	850	750	980	40
СП-03	850	750	980	40

Функциональные размеры столов пеленальных:

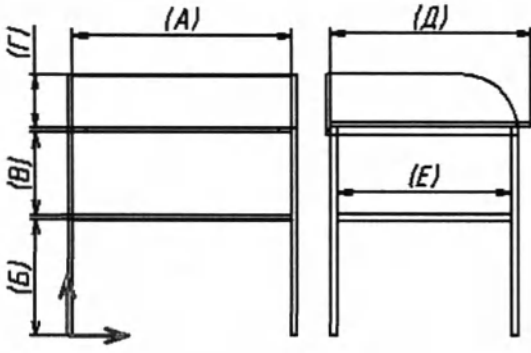		СП-01	СП-02	СП-03
Общий вид стола, размеры в мм		A=818	A=830	A=790
вид спереди	вид сбоку	B=438	B=434	B=434
		B=310	B=230	B=230
		Г=200	Г=184	Г=164
		Д=733	Д=750	Д=750
		Е=683	Е=645	Е=645

5. Материалы используемые при производстве наборов мебели:

5.1 Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

- ЛДСП 16мм марки Р-2 производства ООО «Увадрев Холдинг», Россия;

5.2 Детали из древесных плит должны быть облицованы:

- детали щитовые декоративные на основе древесных плит: столешницы класс эмиссии формальдегида Е1 производства ООО «СоюзБалтКомплект», Россия по СТО 5367-001- 50012764-2007;

- кромка декоративная: для столешниц и плинтуса производства ООО «СоюзБалтКомплект», Россия, по СТО 569430-007-2012.

- кромка мебельная ПВХ толщиной 2мм и 0,4мм производства GP-Plast код ОКП 224520, Китай.

5.3 Для окраски металлокаркаса применяется краска RAL 7035 производства Flycoat, Италия.

5.4 Детали из стекла производства ОАЛ «Салават-стекло» по ГОСТ1111-92.

5.5 Трубы металлокаркаса 20*20,25*25,30*30 мм, производства Первоуральского Новотрубного завода по ГОСТ 863р-82в/ГОСТ13663-86.

5.6 Ручки-скоба (лицевая фурнитура), производство ООО «Боярд».

5.7 Винилискожа, производства Нижнекамского завода искусственных кож по ГОСТ 111- 96.

5.8 Кожа искусственная Skaden, производства Бельгия.

6. Устройство и работа:

Столы:

Пеленальные столы СП-02, СП-03 поставляется в собранном виде. Вкладные и накладные элементы закреплены неподвижно. Остальные столы поставляются в разобранном виде и собираются при помощи:

Пеленальные столы СП-01:

Задняя стенка, полка стяжная и ложе закрепляются между боковыми стенками при помощи еврвинтов.

7. Маркировка

Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак ;
- наименование и обозначение исполнения мебели;
- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- юридический адрес производителя;
- наименование страны и изготовителя;

- наименование и местонахождение и изготовителя;
- год и месяц выпуска;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный и изготовителем.

Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, невидимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

8. Упаковка

Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации;

При транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

Водным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

Упаковывание, транспортирование и хранение стеклонизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

9. Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения:

мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);

беречь от ударов, падений, битья и иного злоумышленного нерационального физического воздействия;

беречь от открытого огня;

не использовать мебель по иному назначению;

- необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия влаги и тепла, не нагружать столешницу более чем указано выше.
наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

10. Подготовка изделия к использованию (включая инструкцию по сборке):

Столы:

вскрыть упаковку, достать детали (пеленальные столы СП-02, СП-03 поставляется в собранном виде), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

1. Пеленальные столы СП-01:

Задняя стенка, полка стяжная и ложе закрепляются между боковыми стенками при помощи евровинтов.

визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений;

установить мебель в необходимом месте;

провести уборку мебели с применением моющего средства.

11. Использование изделия

Использовать наборы мебели согласно своему функциональному назначению.

12. Техническое обслуживание

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.

Наружные поверхности мебели протирать влажной тряпкой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 или 0,5 % растворе моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

13. Транспортирование

13.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

13.2 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

13.3 Транспортирование допускается только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.), при этом колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным и умеренным климатом при температурах от минус 50 до +50°C (по условиям хранения 5 ГОСТ 15150).

14. Хранение

Условия хранения:

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %;

Гарантийный срок хранения на складах поставщика не более 24 месяцев.

15. Утилизация

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.

16. Гарантийные сроки хранения


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне рыночном распределении - 24 месяца со дня получения ее потребителем.

Средний срок службы не менее 10 лет.

17. Чертежи и схемы мебели:


Чертежи и схемы изделий представлены на рисунок 1.

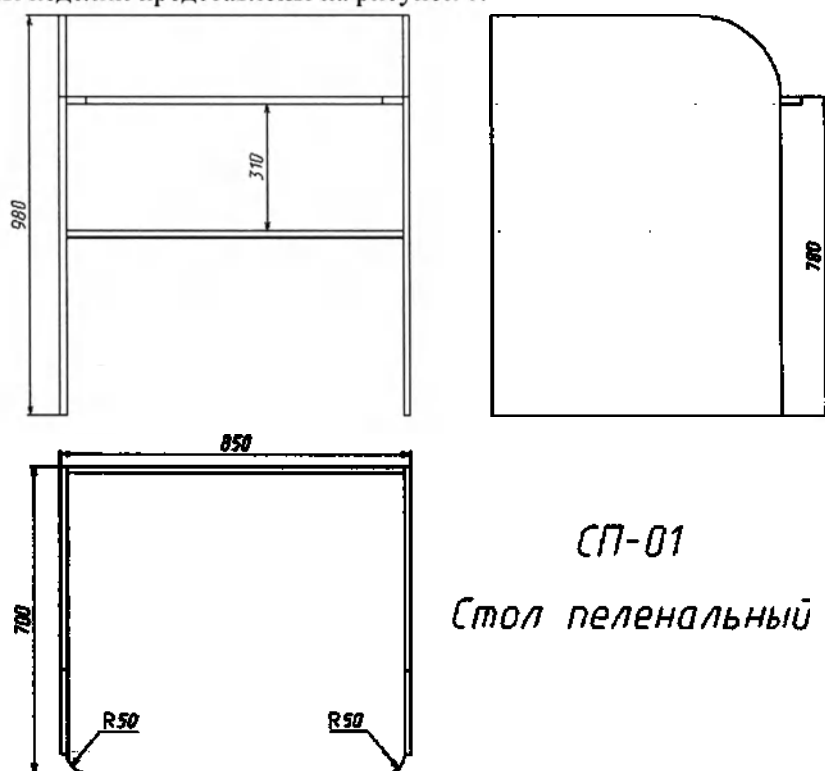

СП-01

Стол пеленальный

Рисунок 1

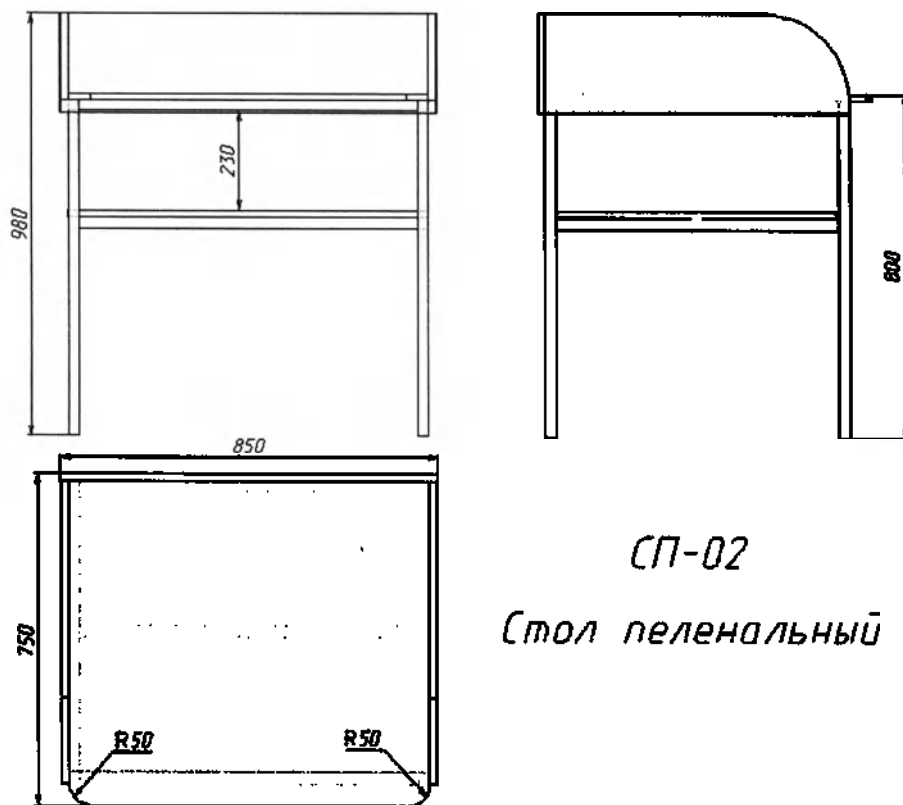

СП-02

Стол пеленальный

Рисунок 2

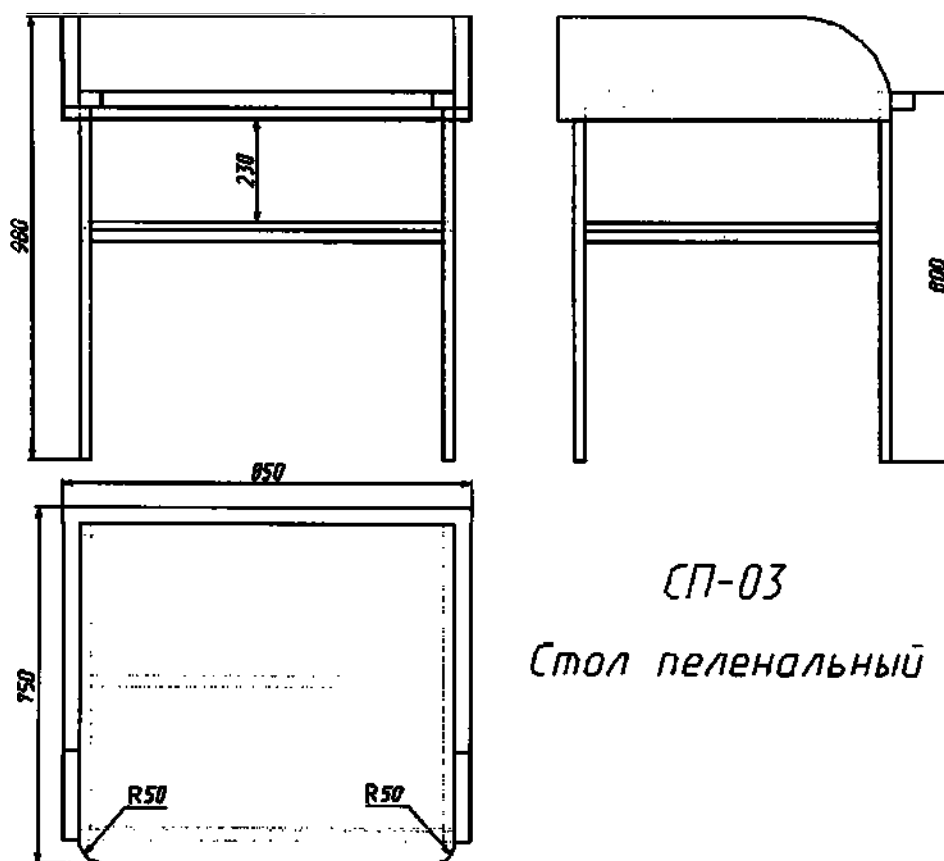


Рисунок 3

Контактные данные производителя

Общество с ограниченной ответственностью Мебельная фабрика «ОМЕТА»
620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б Тел.: +7 (343) 311-22-27

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

7 (семь) листов(-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Директор Поляков А.А.

Подпись _____



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на медицинское изделие
Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018:
для оснащения кабинета врача

2018

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на наборы мебели медицинской (далее - наборы мебели), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

1. Назначение изделия: Предназначена для оборудования лечебных учреждений.

2. Область распространения: широкого применения.

3. Комплектация:

1. Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30.110-003-72886127-2018 для оснащения кабинета врача:

Вариант комплектации 1:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Ширма медицинская, варианты исполнения: ШМ-2, ШМ-3;
 - 1. Паспорт ПС-ШМ-2 – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-ШМ-3 – 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-02н, СИ-03п;
 - 1. Паспорт ПС-СИ-02н – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СИ-03п – 1 шт.
- Стол пеленальный медицинский, варианты: СП-02, СП-03;
 - 1. Паспорт ПС-СП-02 – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СП-03 – 1 шт.
- Кушетка медицинская, варианты исполнения: КС-01, КФ, КФ-1, КФ-2, КС-01у, КС-01л, КФ-3;
 - 1. Паспорт ПС-КС-01 – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-КФ – 1 шт.
 - 3. Паспорт ПС-КФ-1 – 1 шт.
 - 4. Паспорт ПС-КФ-2 – 1 шт.
 - 5. Паспорт ПС-КС-01у – 1 шт.
 - 6. Паспорт ПС-КС-01л – 1 шт.
 - 7. Паспорт ПС-КФ-3 – 1 шт.
- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш
 - 1. Паспорт ПС-СМК-01г – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СМК-02ш – 1 шт.
 - 3. Паспорт ПС-ТМК-01г – 1 шт.
 - 4. Паспорт ПС-ТМК-02ш – 1 шт.
 - 5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.
 - 6. Паспорт ПС-ТМК-03ш – 1 шт.
 - 7. Паспорт ПС – ТМЛ-01 – 1 шт.
 - 8. Паспорт ПС – ТМЛ-02 – 1 шт.

Вариант комплектации 2:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Ширма медицинская, варианты исполнения: ШМ-2;
 - 1. Паспорт ПС-ШМ-2 – 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-03н, СИ-03п;
 - 1. Паспорт ПС-СИ-03н – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СИ-03п – 1 шт.
- Кушетка медицинская, варианты исполнения: КС-01, КФ, КФ-1, КФ-2, КС-01у, КС-01л, КФ-3
 - 1. Паспорт ПС-КС-01 – 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-КФ – 1 шт.
 - 3. Паспорт ПС-КФ-1 – 1 шт.
 - 4. Паспорт ПС-КФ-2 – 1 шт.
 - 5. Паспорт ПС-КС-01у – 1 шт.
 - 6. Паспорт ПС-КС-01л – 1 шт.
 - 7. Паспорт ПС-КФ-3 – 1 шт.

- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01ш, СМК-02г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-03г;
 1. Паспорт ПС-СМК-01ш – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СМК-02г – 1 шт.
 3. Паспорт ПС-ТМК-01ш – 1 шт.
 4. Паспорт ПС-ТМК-02г – 1 шт.
 5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.

Вариант комплектации 3:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-02н, СИ-02п;
 1. Паспорт ПС-СИ-02н – 1 шт.
 1. 2.Паспорт ПС-СИ-02п – 1 шт.
- Стол пеленальный медицинский, варианты: СП-01, СП-02;
 1. Паспорт ПС-СП-01 – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СП-02 – 1 шт.

Вариант комплектации 4:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Тумба медицинская, варианты исполнения: ТМК-03ш, ТМЛ-01, ТМЛ-02;
 1. Паспорт ПС-ТМК-03ш – 1 шт.
 2. Паспорт ПС – ТМЛ-01 – 1 шт.
 3. Паспорт ПС – ТМЛ-02 – 1 шт.

Показания к применению

Наборы мебели медицинской предназначены для оборудования лечебных учреждений с целью обеспечения их функциональности и выделения места для используется для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, необходимого медицинского инструмента, проведения лечебных процедур, раздачи лекарств, приема пищи пациентами, размещения принадлежностей пациентов и др.

Противопоказания к применению

Мебель противопоказаний к применению не имеет.


4. Технические характеристики:


Масса и габаритные размеры изделий:

Обозначение	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
ШМ-2	1400	350	1770	13
ШМ-3	2100	350	1770	17
СИ-02н	630	460	880	20
СИ-03п	630	460	880	20
СП-02	850	750	980	40
СП-03	850	750	980	40
КС-01	1950	600	550	30
КФ	1950	600	550	40
КФ-1	2000	650	600	95
КФ-2	2000	650	600	50
КС-01у	1950	600	550	35
КС-01л	2000	650	600	35
КФ-3	2000	650	600	40
СМК-01г	1400	600	850	85
СМК-02ш	1400	600	850	90
ТМК-01г	800	600	850	50
ТМК-02ш	800	600	850	55
ТМК-03г	800	600	55	55
ТМК-03ш	800	600	55	55


ТМЛ-01	800	600	850	35
ТМЛ-02	800	600	850	35

Функциональные размеры:

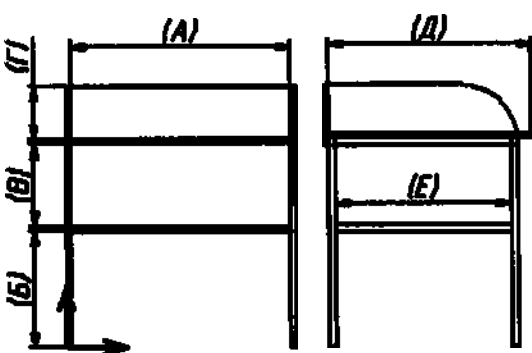	СП-01	СП-02	СП-03
Общий вид стола, размеры в мм	A=818	A=830	A=790
вид спереди	B=438	B=434	B=434
вид сбоку	B=310	B=230	B=230
	Г=200	Г=184	Г=164
	Д=733	Д=750	Д=750
	Е=683	Е=645	Е=645

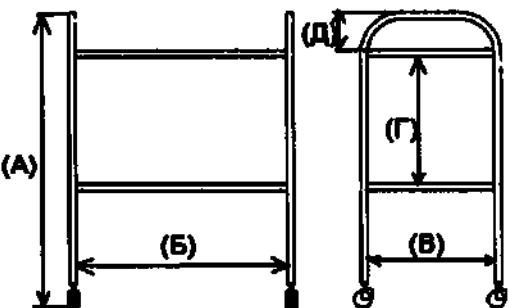	СИ-02н	СИ-02п	СИ-03н	СИ-03п
Общий вид стола, размеры в мм	A=880	A=880	A=880	A=880
вид спереди	B=580	B=580	B=580	B=580
вид сбоку	B=410	B=410	B=410	B=410
	Г=380	Г=380	Г=280	Г=280
	Д=110	Д=110	Д=110	Д=110


	ШМ-2	ШМ-3
Внутренние размеры (ШхВ), в мм	680x1575	680x1575

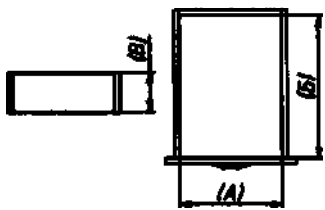	ТМК-01г	ТМК-01ш	ТМК-02г	ТМК-02ш	ТМК-03г	ТМК-03ш
Внутренние размеры ящиков, в мм	-	-	A=266	A=266	A=266	A=266
вид спереди			B=384	B=384	B=384	B=384
вид сверху			B=80	B=80	B=80	B=80
						

Размеры столешницы, мм	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460х660х233	460х660х233	480х660х339	480х660х339	460х322х233	460х322х233

	СМК-01г	СМК-01ш	СМК-02г	СМК-02ш	ТМЛ-01	ТМЛ-02
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху	-	-	A=331 Б=384 В=80	A=331 Б=384 В=80	-	-
Размеры столешницы, мм	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460х388х233 460х801х233	460х388х233 460х801х233	460х801х233	460х801х233	548х734х575	548х734х575

	КС-01	КФ	КФ-1	КФ-2	КС-01у	КС-01л	КФ-3
Размеры ложа, мм	A=1950 Б=600	A=1960 Б=600	A=2000 Б=650	A=2000 Б=650	A=1950 Б=600	A=2000 Б=650	A=2000 Б=650

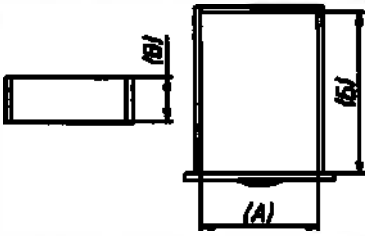Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	-	-	A=411 Б=484 В=80	-	-	-	-
	-	-	A=411 Б=484 В=100	-	-	-	-
	-	-	A=411 Б=484 В=150	-	-	-	-
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	-	-	-	300x1746 x303	-	-	-

5. Материалы используемые при производстве наборов мебели:

5.1 Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

- ЛДСП 16мм марки Р-2 производства ООО «Увадрев Холдинг», Россия;

5.2 Детали из древесных плит должны быть облицованы:

- детали щитовые декоративные на основе древесных плит: столешницы класс эмиссии формальдегида Е1 производства ООО «СоюзБалтКомплект» Россия по СТО 5367-001- 50012764-2007;

- кромка декоративная: для столешниц и плинтуса производства ООО «СоюзБалтКомплект», Россия, по СТО 569430-007-2012.

- кромка мебельная ПВХ толщиной 2мм и 0,4мм производства GP-Plast код ОКП 224520, Китай.

5.3 Для окраски металлокаркаса применяется краска RAL 7035 производства Flycoat, Италия.

5.4 Детали из стекла производства ОАЛ «Салават-стекло» по ГОСТ 111-92.

5.5 Трубы металлокаркаса 20*20,25*25,30*30 мм, производства Первоуральского Новотрубного завода по ГОСТ 863р-82в/ГОСТ 13663-86.

5.6 Ручки-скоба (лицевая фурнитура), производство ООО «Боярд».

5.7 Винилискожа, производства Нижнекамского завода искусственных кож по ГОСТ "1111- 96.

5.8 Кожа искусственная Skaden, производства Бельгия.

6. Устройство и работа:

6.1 Кушетки:

Мебель поставляется в собранном виде, кроме кушеток: КС-01, КС-01у. Вкладные и накладные элементы закреплены неподвижно.

Сборка кушеток КС-01 и КС-01 у: ложе закрепить на металлические опоры при помощи болтов и гаек.

Изделия мебели не имеют роликовых (колесных) опор.

Изделия мебели установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

6.2 Столы:

Пеленальные столы СП-02, СП-03 поставляется в собранном виде. Вкладные и накладные элементы закреплены неподвижно. Остальные столы поставляются в разобранном виде и собираются при помощи:

Пеленальные столы СП-01:

Задняя стенка, полка стяжная и ложе закрепляются между боковыми стенками при помощи евровинтов.

Изделия мебели (СИ-02н, СИ-02п, СИ-03п, СИ-03н), установленные на роликовые (колесные) опоры (Колёсная опора 68 мм (с болтом) D50) должны:

- иметь свободный ход по поверхности пола при усилении;

- стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний.

Изделия мебели установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без

раскачиваний.

6.3 Тумбы:

Тумбы СМК-01г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш, поставляются в собранном виде.

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.
- крепить ко дну боковые стенки с помощью евровинтов.
- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.
- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.
- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.
- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.
- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.

- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков.

Двери изделий имеют петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

Изделие не имеет комбинированную дверь из металла и стекла.

Изделия мебели (ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш, ТМЛ-01, ТМЛ-02), установленные на роликовые (колесные) опоры (колесная опора резиновая с тормозом/без тормоза) должны:

- иметь свободный ход по поверхности пола при усилии;
- стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний.

Изделия мебели установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

7. Маркировка

Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и обозначение исполнения мебели;
- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- юридический адрес производителя;
- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- год и месяц выпуска;
- гарантийный срок
- срок службы, установленный изготовителем.

Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

8. Упаковка

Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта, при транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности -

в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации.

Водным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (защитные) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

Упаковывание, транспортирование и хранение стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192. Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

9. Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения:

Мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);

беречь от ударов, падения, битья и иного злоумышленного нерационального физического воздействия;

беречь от открытого огня;

не использовать мебель по иному назначению

- необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия влаги и тепла,

не нагружать столешницу более чем указано выше.

наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

10. Подготовка изделия к использованию (включая инструкцию по сборке):

Столы:

Вскрыть упаковку, достать детали (пеленальные столы СП-02, СП-03 поставляется в собранном виде), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

1. Пеленальные столы СП-01:

Задняя стенка, полка стяжная и ложе закрепляются между боковыми стенками при помощи евровинтов.

2. Столы инструментальные собираются при помощи винтов и гаек. Полки из стекла устанавливаются на полкодержатели в металлические рамки, металлические полки крепятся к опорам (стойкам) при помощи винтов и гаек. К опорам (стойкам) закрепляют колесные опоры. Визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений; установить мебель в необходимом месте; провести уборку мебели с применением моющего средства.

Тумбы:

Вскрыть упаковку, достать детали (тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде).

принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.

- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.

- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.

- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.

- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.

- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.

- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМК-05, ТМК-05ш, ТМК-06, ТМК-09, ТМК-09ш, ТМК-10, ТМК-Юш, ТМК-11, ТМК11ш:

- корпус тумбы крепить на металлокаркас с помощью винтов и гаек.

- столешницу закрепить к металлу каркасу при помощи саморезов.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.

- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков, визуальную проверку мебели в собранном состоянии на наличие механических повреждений; установить мебель в необходимом месте; провести уборку мебели с применением моющего средства.

Кушетки:

Вскрыть упаковку, достать мебель (мебель поставляется в собранном виде, кроме кушеток: КС-01, КС-01у), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

сборка кушеток КС-01 и КС-01 у: ложе закрепить на металлические опоры при помощи болтов и гаек.

Визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений; установить мебель в необходимом месте;

Провести уборку мебели с применением моющего средства.

11. Использование изделия

Использовать наборы мебели согласно своему функциональному назначению.

12. Техническое обслуживание

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.

Наружные поверхности мебели протирать влажной тряпкой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 или 0,5 % растворе моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

13. Транспортирование

13.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

13.2 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта

13.3 Транспортирование допускается только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.), при этом колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным и умеренным климатом при температурах от минус 50 до +50° С (по условиям хранения 5 ГОСТ 15150).

14. Хранение

Условия хранения:

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %;

Гарантийный срок хранения на складах поставщика не более 24 месяцев.

15. Утилизация

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.

16. Гарантийные сроки хранения

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерыночном распределении - 24 месяца со дня получения ее потребителем.

Средний срок службы не менее 10 лет.

17. Чертежи и схемы мебели:

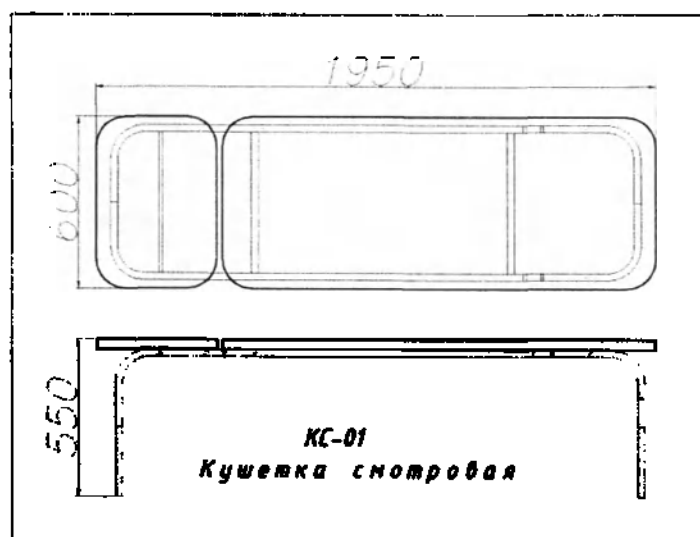


Рисунок 1

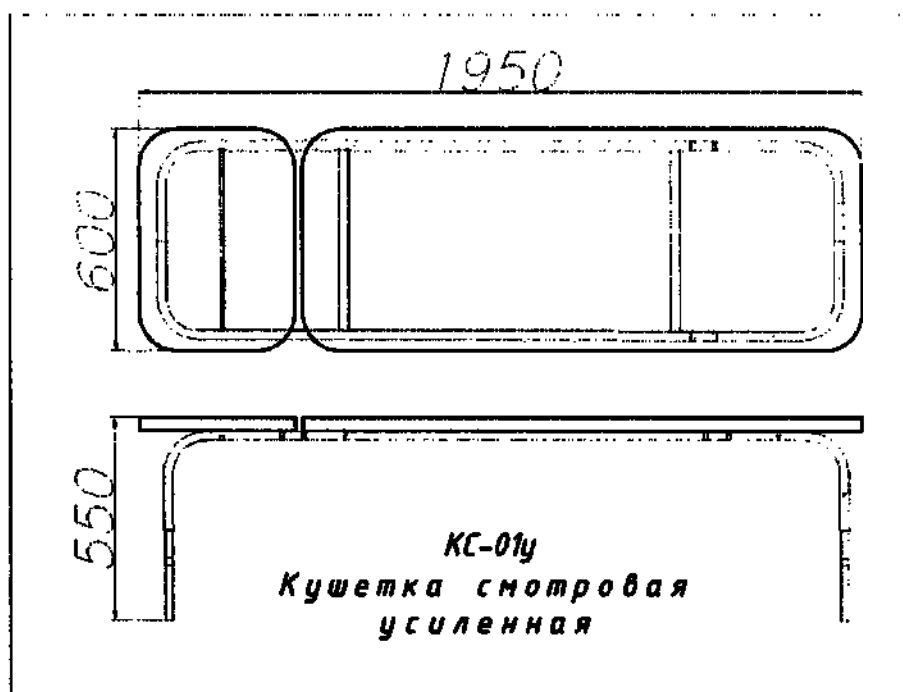


Рисунок 2

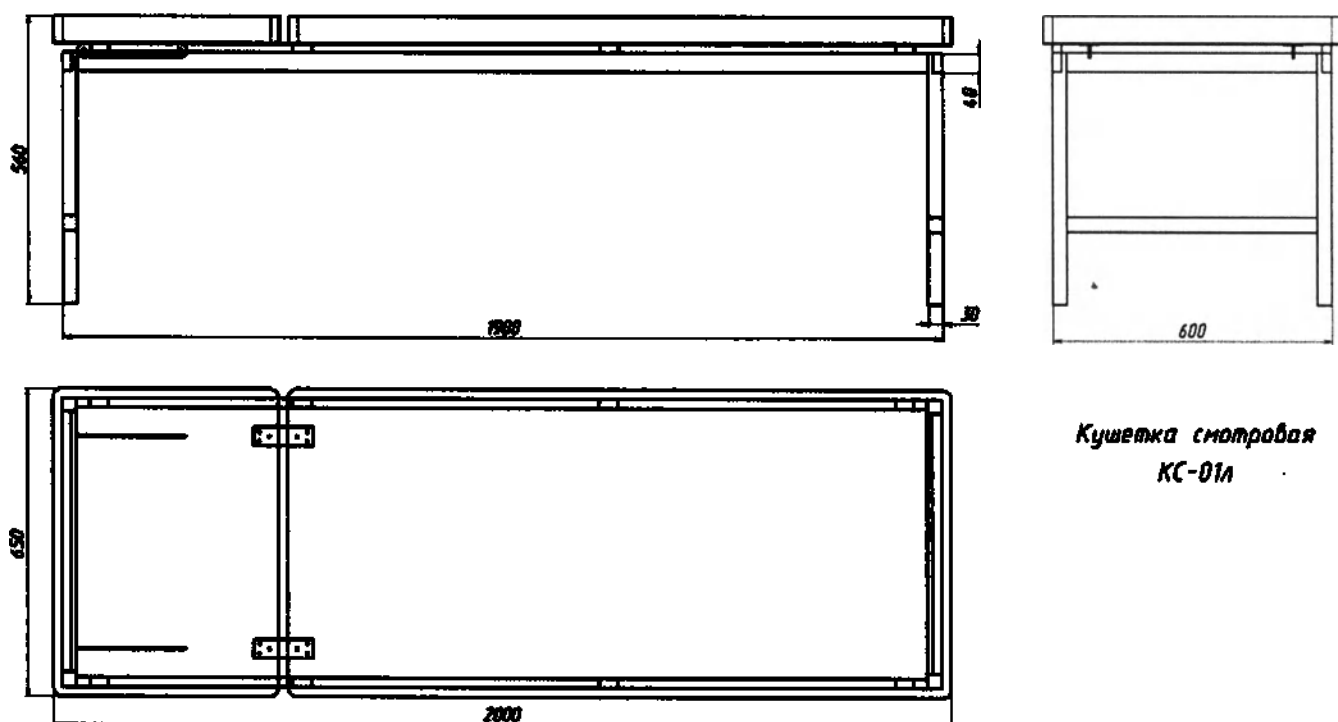


Рисунок 3

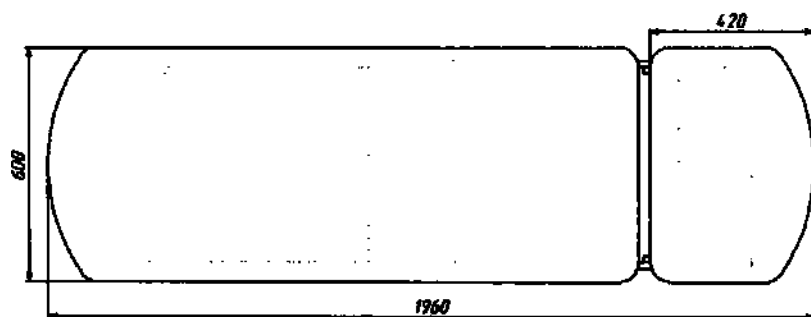
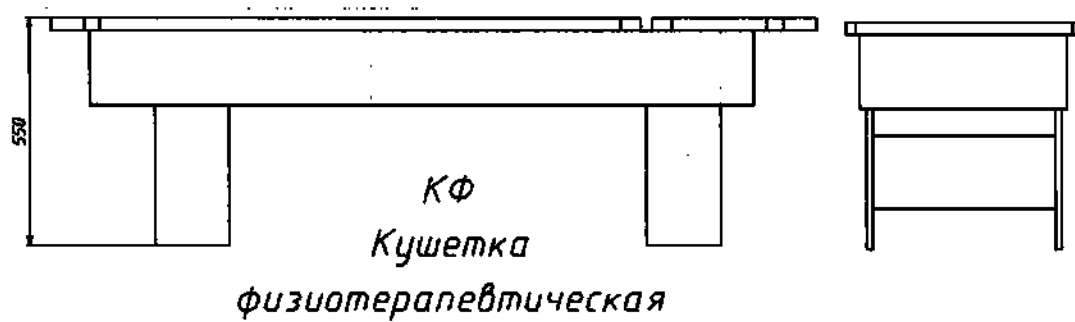


Рисунок 4



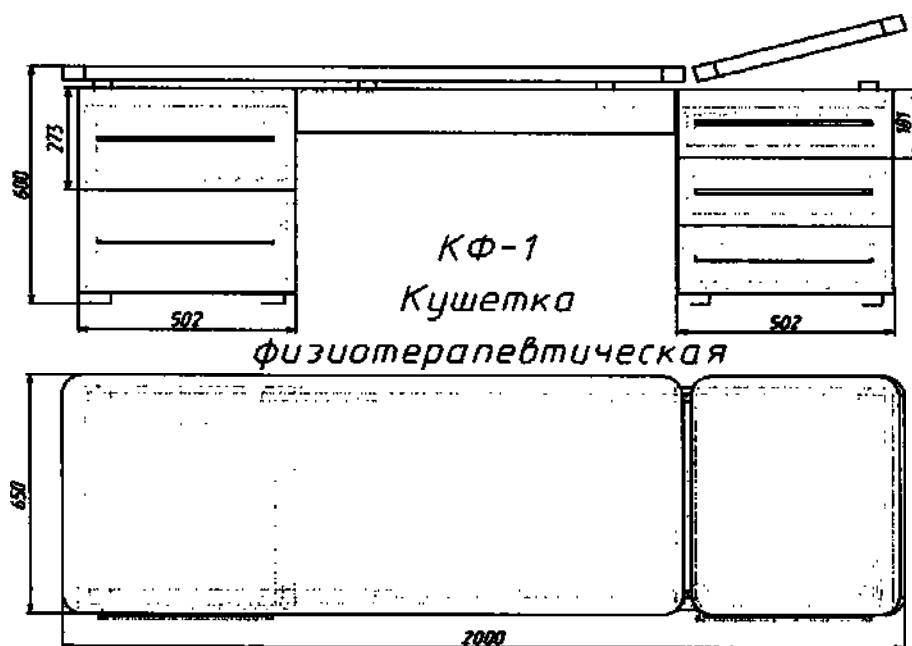


Рисунок 5

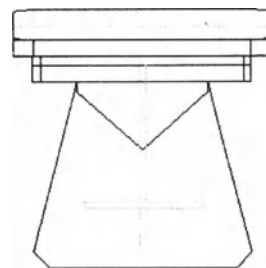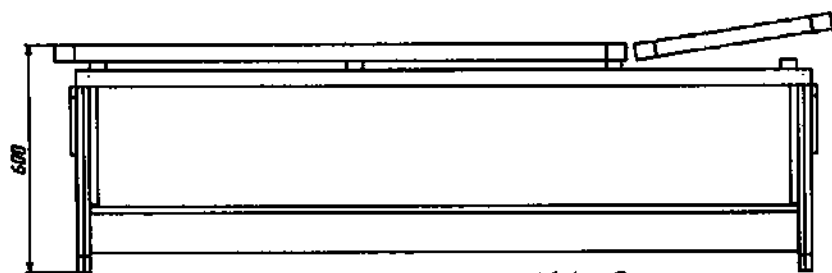

КФ-2
Кушетка
физиотерапевтическая



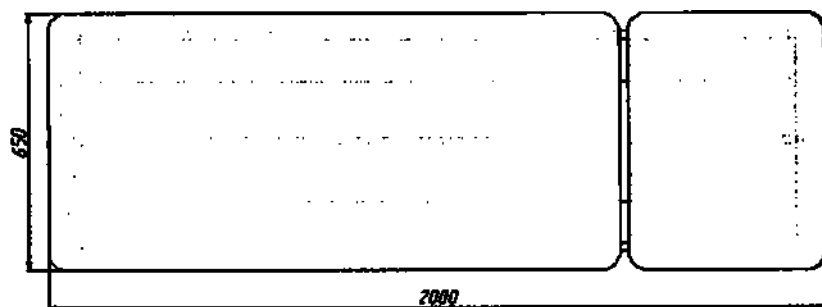


Рисунок 6

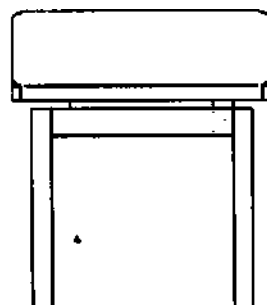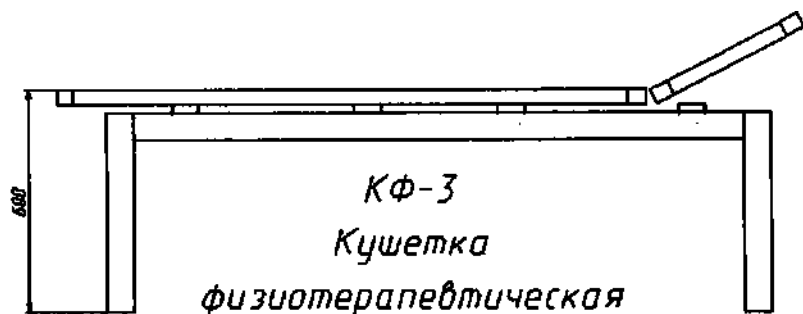

КФ-3
Кушетка
физиотерапевтическая



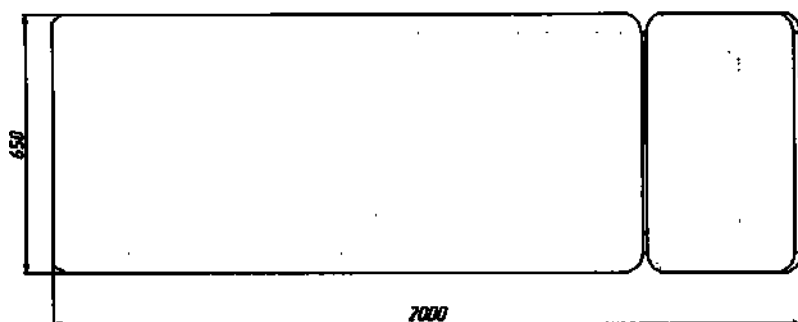


Рисунок 7

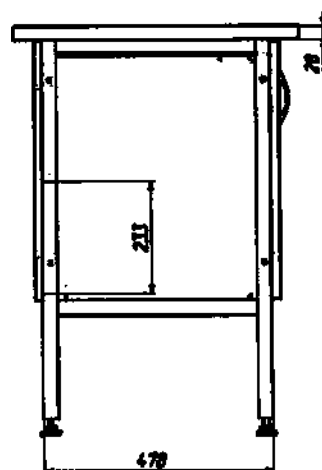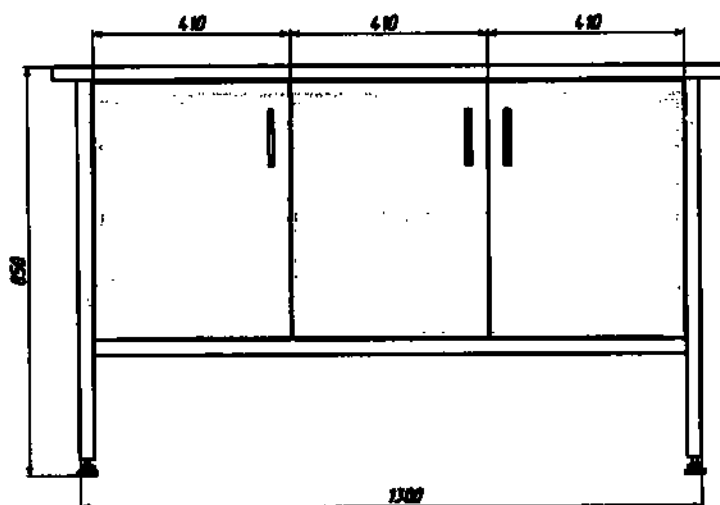

CMK-01a
Тумба лабораторная



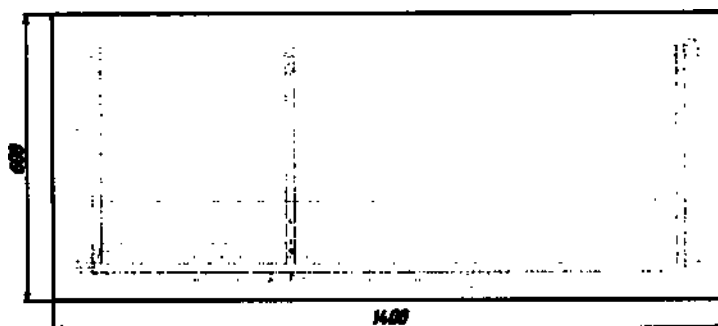


Рисунок 8

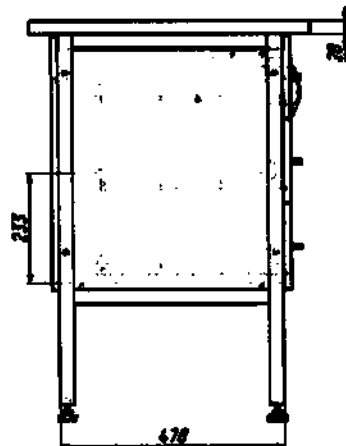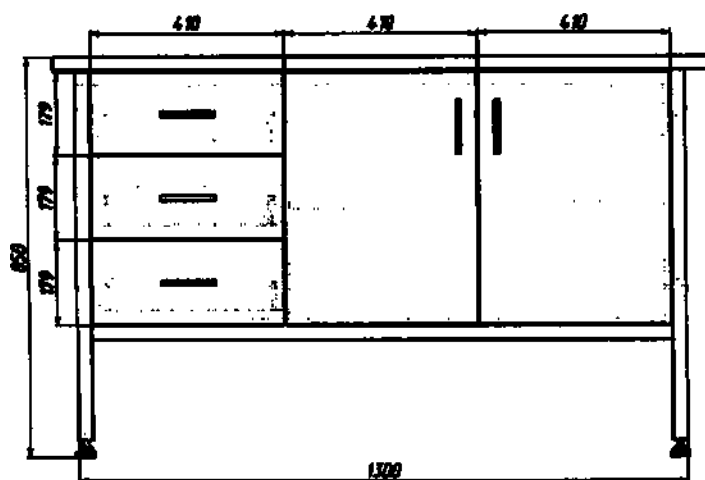

CMK-02a
Тумба лабораторная







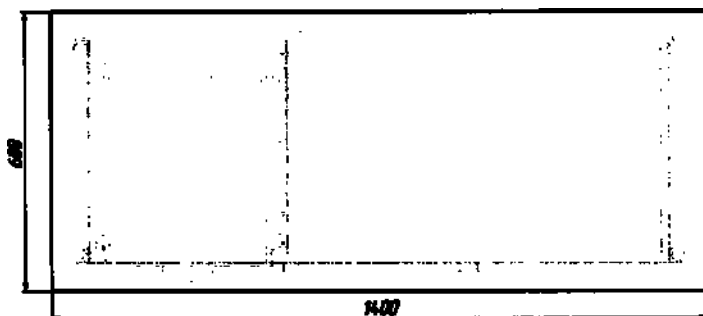


Рисунок 9

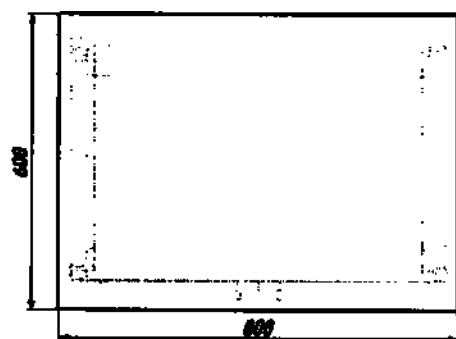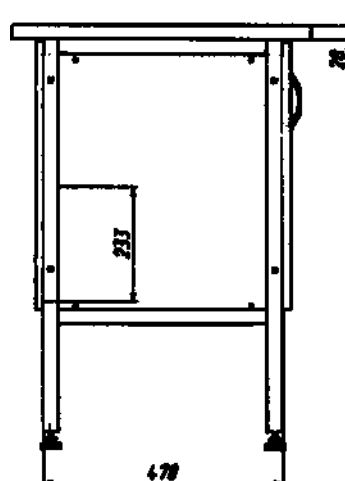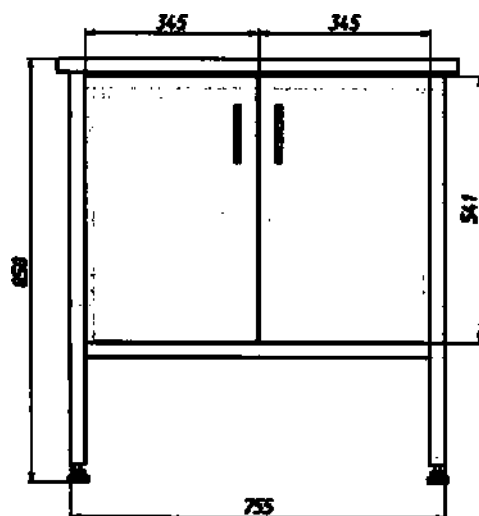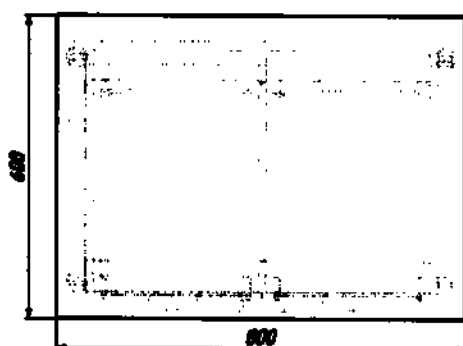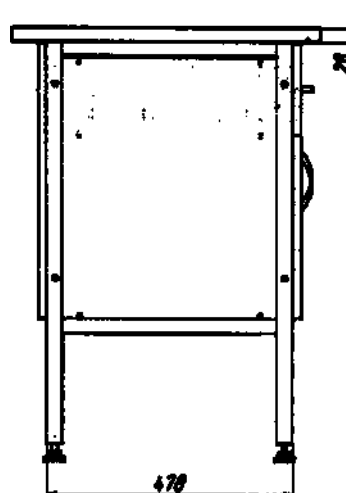


TMK-01z
Тумба лабораторная

Рисунок 10

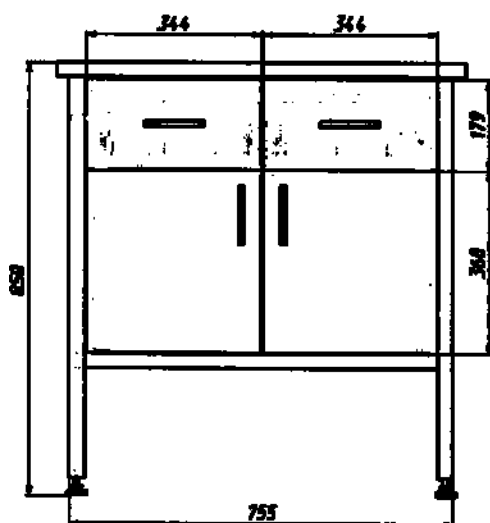

TMK-02ш
Тумба лабораторная

Рисунок 11

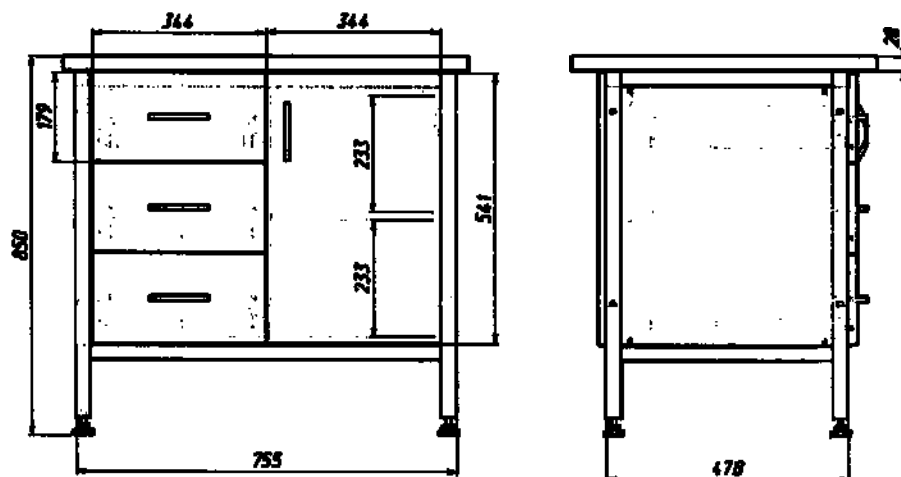

TMK-03z
Тумба лабораторная


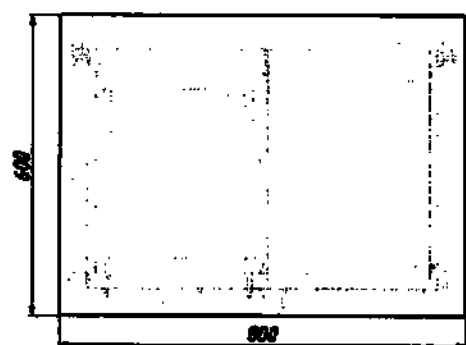


Рисунок 12

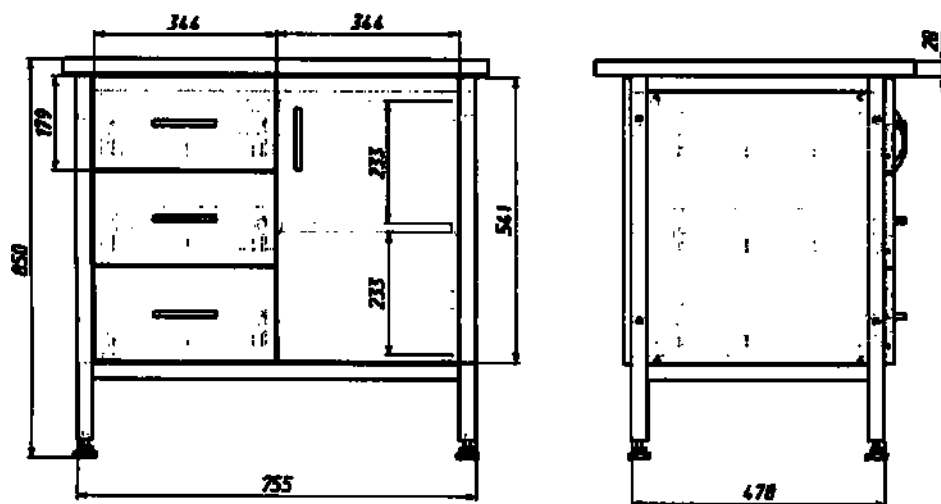

TMK-03ш
Тумба лабораторная






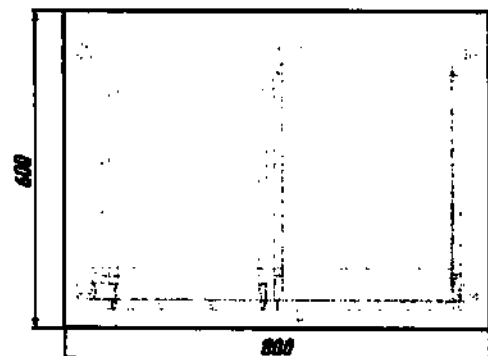


Рисунок 13

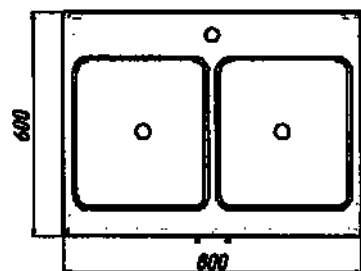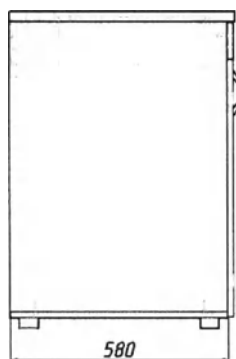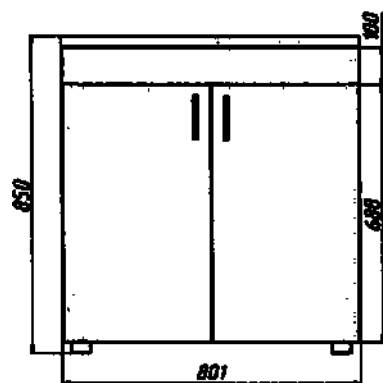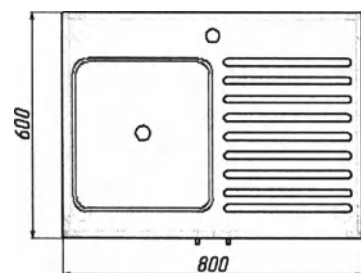

Тумба с накладной мойкой
ТМЛ-01

Рисунок 14

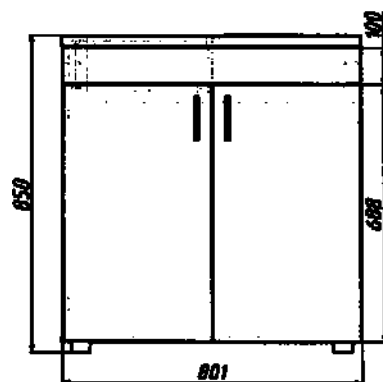

Тумба с накладной мойкой
ТМЛ-02

Рисунок 15

ШМ-2



ШМ-3





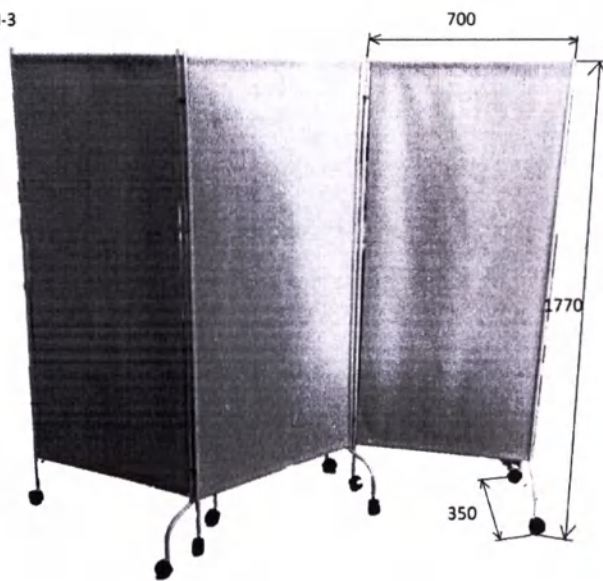


Рисунок 16

Рисунок 17

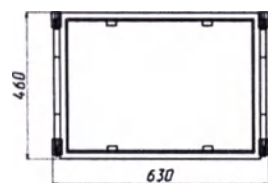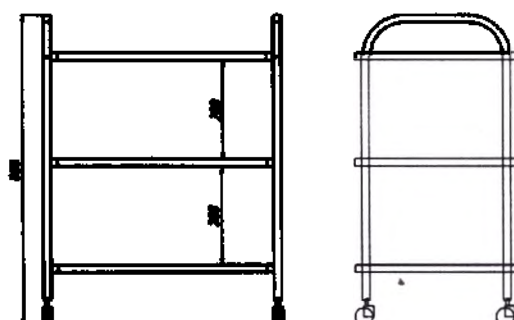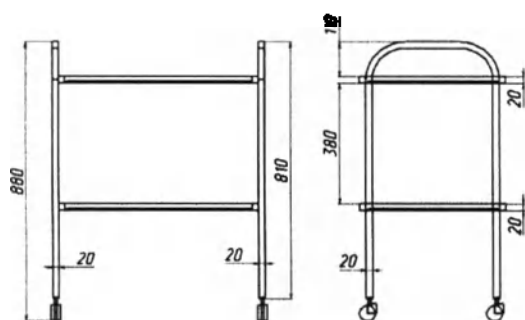

Стол инструментальный
СИ-82н

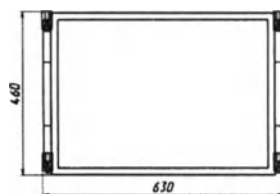

Стол инструментальный
СИ-83н

Рисунок 18

Рисунок 19

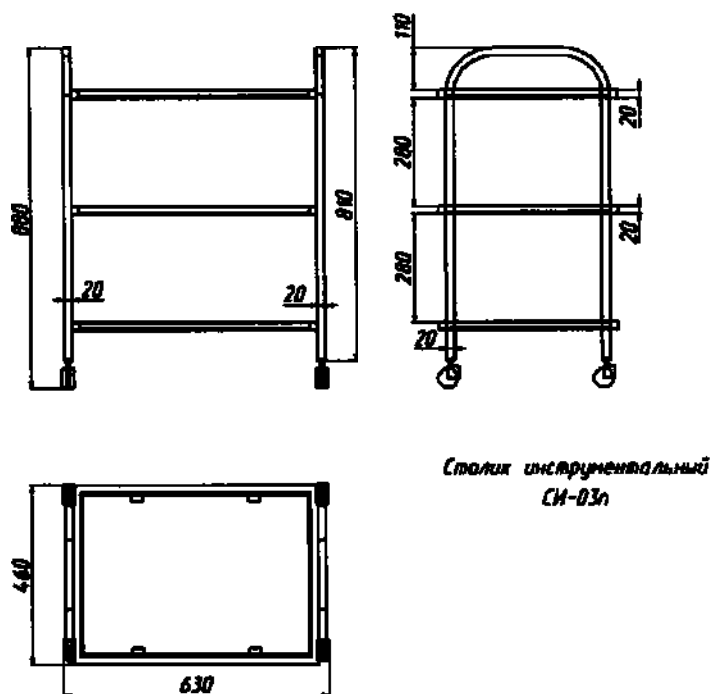


Рисунок 20

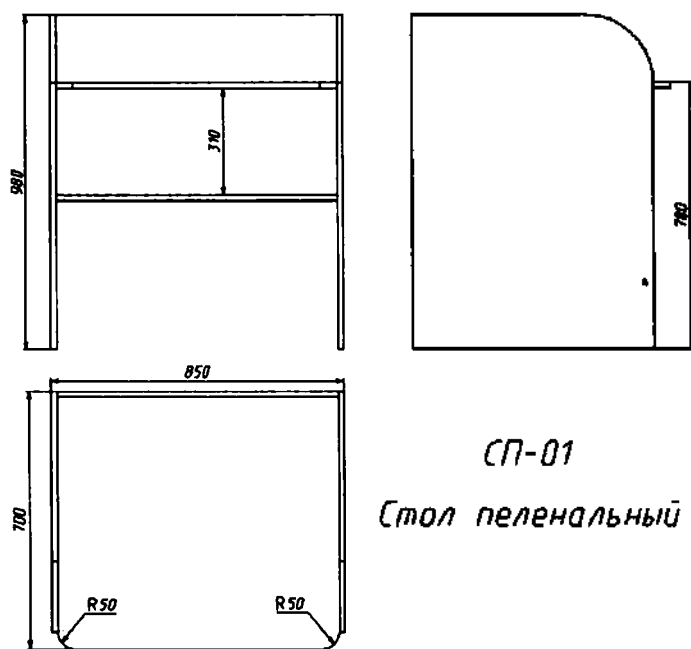


Рисунок 21

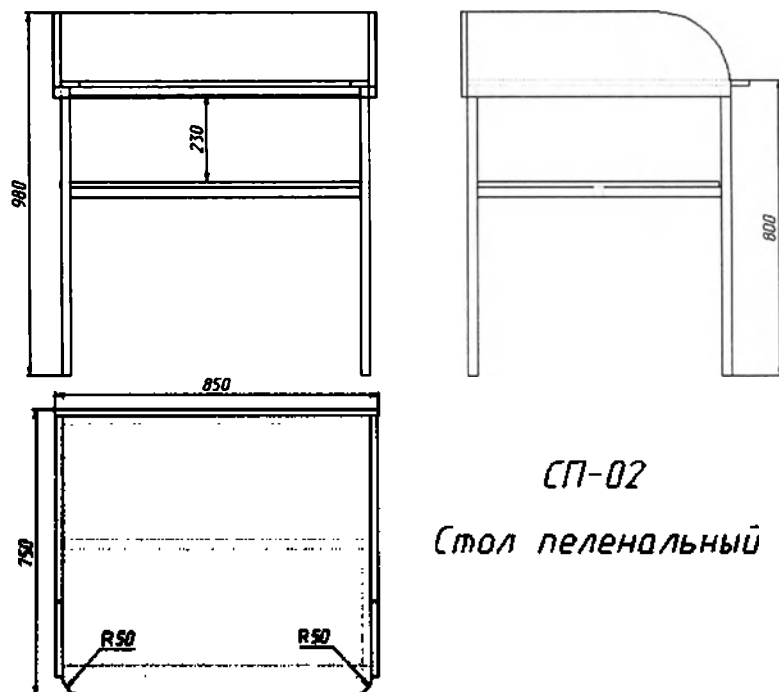


Рисунок 22

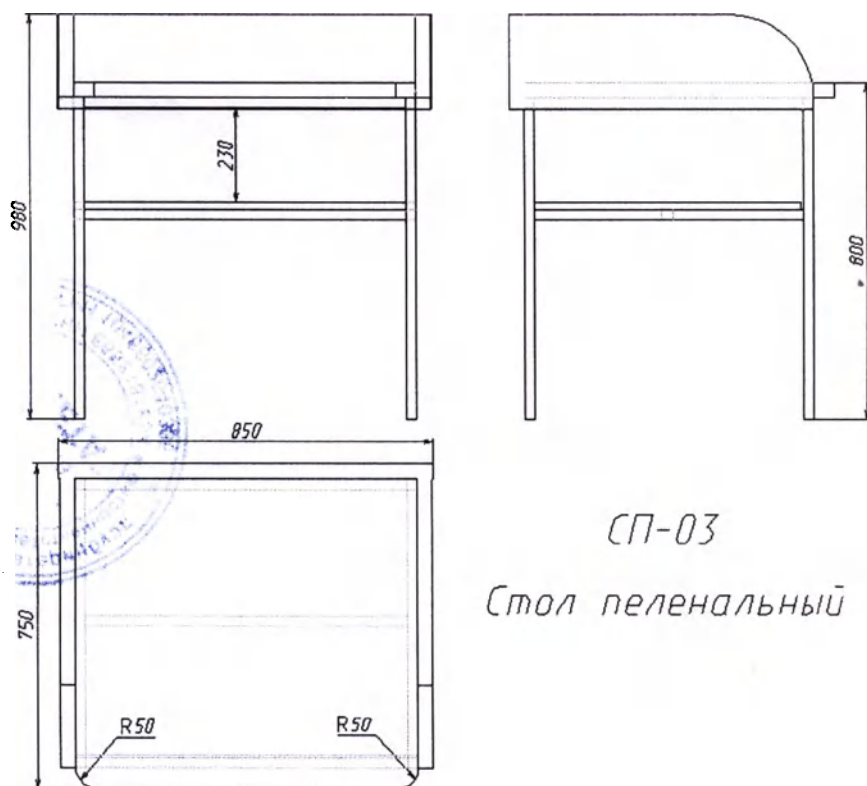


Рисунок 23

Контактные данные производителя

Общество с ограниченной ответственностью Мебельная фабрика «ОМЕТА»
620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 67 Б Тел.: +7 (343) 311-22-27

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

20 (двадцать) листов(-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА»

Директор Поляков А.А.

Подпись _____



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на медицинское изделие
Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018
для оснащения палаты пациента

2018

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на наборы мебели медицинской (далее - наборы мебели), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

1. Назначение изделия: Предназначена для оборудования лечебных учреждений.

2. Область распространения: широкого применения.

3. Комплектация:

1. Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018 для оснащения палаты пациента:

Вариант комплектации 1:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Тумба прикроватная с поворотной столешницей медицинская, варианты: ТМК-06ш, ТМК-09, ТМК-10, ТМК-11ш;

1. Паспорт ПС-ТМК-06ш – 1 шт.

2. Паспорт ПС-ТМК-09 – 1 шт.

3. Паспорт ПС-ТМК-10 – 1 шт.

4. Паспорт ПС-ТМК-11ш – 1 шт.

- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш, ТМЛ-01, ТМЛ-02

1. Паспорт ПС-СМК-01г – 1 шт.

2. Паспорт ПС-СМК-02ш – 1 шт.

3. Паспорт ПС-ТМК-01г – 1 шт.

4. Паспорт ПС-ТМК-02ш – 1 шт.

5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.

6. Паспорт ПС-ТМК-3ш – 1 шт.

7. Паспорт ПС-ТМЛ-01 – 1 шт.

8. Паспорт ПС-ТМЛ-02 – 1 шт.

Вариант комплектации 2:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Тумба прикроватная с поворотной столешницей медицинская, варианты: ТМК-05, ТМК-05ш, ТМК-06;

1. Паспорт ПС-ТМК-05 – 1 шт.

2. Паспорт ПС-ТМК-05ш – 1 шт.

3. Паспорт ПС-ТМК-06 – 1 шт.

- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01ш, СМК-02г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-03г;

1. Паспорт ПС-СМК-01ш – 1 шт.

2. Паспорт ПС-СМК-02г – 1 шт.

3. Паспорт ПС-ТМК-01ш – 1 шт.

4. Паспорт ПС-ТМК-02г – 1 шт.

5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.

Вариант комплектации 3:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Тумба прикроватная с поворотной столешницей медицинская, варианты: ТМК-05, ТМК-05ш, ТМК-06, ТМК-06ш, ТМК-09, ТМК-09ш, ТМК-10, ТМК-10ш, ТМК-11, ТМК-11ш;

1. Паспорт ПС-ТМК-05 – 1 шт.

2. Паспорт ПС-ТМК-05ш – 1 шт.

3. Паспорт ПС-ТМК-06 – 1 шт.

4. Паспорт ПС-ТМК-06ш – 1 шт.

5. Паспорт ПС-ТМК-09 – 1 шт.

6. Паспорт ПС-ТМК-09ш – 1 шт.

7. Паспорт ПС-ТМК-10 – 1 шт.

8. Паспорт ПС-ТМК-10ш – 1 шт.

9. Паспорт ПС-ТМК-11 – 1 шт.

Показания к применению

Наборы мебели медицинской предназначены для оборудования лечебных учреждений с целью установки в лечебных учреждениях с целью оснащения кабинетов и (или) палат, а также для операционных, процедурных кабинетов, медицинских лабораторий.

Противопоказания к применению


Мебель противопоказаний к применению не имеет.

4. Технические характеристики

Масса и габаритные размеры изделий



Обозначение	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
ТМЛ-02	800	600	850	35
ТМЛ-01	800	600	850	40
СМК-01г	1400	600	850	85
СМК-01ш	1400	600	850	85
СМК-02г	1400	600	850	90
СМК-02ш	1400	600	850	90
ТМК-01г	800	600	850	50
ТМК-01ш	800	600	850	50
ТМК-02г	800	600	850	55
ТМК-02ш	800	600	850	55
ТМК-03г	800	600	55	55
ТМК-03ш	800	600	55	55
ТМК-05	450	580	700	35
ТМК-05ш	450	580	1100	35
ТМК-06	450	580	700	35
ТМК-06ш	450	580	700	35
ТМК-09	450	580	700	30
ТМК-09ш	450	580	700	30
ТМК-10	450	580	700	32
ТМК-10ш	450	580	700	32
ТМК-11	450	580	700	32
ТМК-11ш	450	580	700	32

Функциональные размеры:

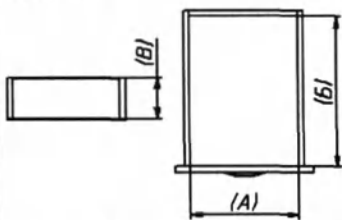	СМК-01г	СМК-01ш	СМК-02г	СМК-02ш	ТМЛ-01	ТМЛ-02
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху	-	-	A=331 Б=384 В=80	A=331 Б=384 В=80	-	-
						

Размеры столешницы, мм	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460х388х233	460х388х233	460х801х233	460х801х233	548х734х575	548х734х575
	460х801х233	460х801х233				

	ТМК-01г	ТМК-01ш	ТМК-02г	ТМК-02ш	ТМК-03г	ТМК-03ш
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху	-	-	A=266 Б=384 В=80	A=266 Б=384 В=80	A=266 Б=384 В=80	A=266 Б=384 В=80
Размеры столешницы, мм	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460х660х233	460х660х233	480х660х339	480х660х339	460х322х233	460х322х233

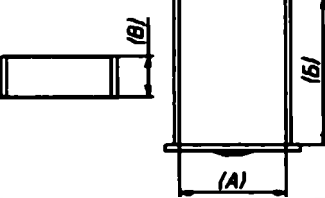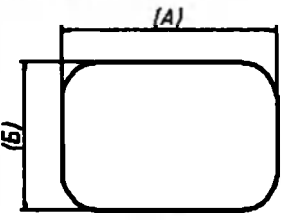	ТМК-05	ТМК-05ш	ТМК-06	ТМК-06ш	ТМК-09	ТМК-09ш	ТМК-10	ТМК-10ш	ТМК-11	ТМК-11ш
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	A=311	A=311	A=311	A=311	-	-	A=311	A=311	-	-
	B=384	B=384	B=384	B=384			B=384	B=384		
	B=150	B=150	B=100	B=100			B=80	B=80		
			A=311	A=311						
			B=384	B=384						
			B=200	B=200						
Размеры поворотной столешницы, мм 	A=580	A=580	A=580	A=580	A=580	A=580	A=580	A=580	A=580	A=580
	B=400	B=400	B=400	B=400	B=400	B=400	B=400	B=400	B=400	B=400
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	-	-	-	-	412x368x227	412x368x227	412x368x338	412x368x338	412x368x120	412x368x120
									412x368x334	412x368x334

5. Материалы используемые при производстве наборов мебели:

5.1 Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

- ЛДСП 16мм марки Р-2 производства ООО «Увадрев Холдинг», Россия;

5.2 Детали из древесных плит должны быть облицованы:

- детали щитовые декоративные на основе древесных плит; столешницы класс эмиссии формальдегида Е1 производства ООО «СоюзБалтКомплект» Россия по СТО 5367-001-50012764-2007;

- кромка декоративная: для столешниц и плинтуса производства ООО «СоюзБалтКомплект», Россия, по СТО 569430-007-2012.

- кромка мебельная ПВХ толщиной 2мм и 0,4мм производства GP-Plast код ОКП 224520, Китай.

5.3 Для окраски металлокаркаса применяется краска RAL 7035 производства Flycoat, Италия.

5.4 Детали из стекла производства ОАЛ «Салават-стекло» по ГОСТ 111-92.

5.5 Трубы металлокаркаса 20*20,25*25,30*30 мм, производства Первоуральского Новотрубного завода по ГОСТ 863р-82в/ГОСТ13663-86.

5.6 Ручки-скоба (лицевая фурнитура), производство ООО «Боярд».

5.7 Винилискожа, производства Нижнекамского завода искусственных кож по ГОСТ 1111- 96.

1.2.8 Кожа искусственная Skaden, производства Бельгия.

6. Устройство и работа:

6.1 Тумбы:

Тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде.

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.
- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.
- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.
- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.
- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.
- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.
- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.

- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков.

Двери изделий имеют петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

(Н102А02).

Изделия не имеют комбинированную дверь из металла и стекла.

Изделия мебели (ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш, ТМЛ-01, ТМЛ-02, ТМК-05, ТМК-05ш, ТМК-06, ТМК-09, ТМК-09ш, ТМК-10, ТМК-10ш, ТМК-11, ТМК-11ш), установленные на роликовые (колесные) опоры (колесная опора резиновая с тормозом/без тормоза) должны:

- иметь свободный ход по поверхности пола при усилии;
- стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний.

Изделия мебели, установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

7. Маркировка

Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и обозначение исполнения мебели;
- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- юридический адрес производителя;
- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- год и месяц выпуска;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем.

Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

8. Упаковка

Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации;

При транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

Водным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвигания при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

Упаковывание, транспортирование и хранение стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

9. Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения:

Мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);

беречь от ударов, падения, битья и иного злоумышленного нерационального физического воздействия;

беречь от открытого огня;

не использовать мебель по иному назначению;

- необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия влаги и тепла.

не нагружать столешницу более чем указано выше.

наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

10. Подготовка изделия к использованию (включая инструкцию по сборке):

Тумбы:

Вскрыть упаковку, достать детали (тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде),

принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов.

эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.

- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.

- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентрикивые стяжки к боковым стенкам.
- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.
- ящики собираются из боковин и задней стенки на евроинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.
- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.
- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМК-05, ТМК-05ш, ТМК-06, ТМК-09, ТМК-09ш, ТМК-10, ТМК-10ш, ТМК-11, ТМК-11ш:

- корпус тумбы крепить на металлокаркас с помощью винтов и гаек.
- столешницу закрепить к металлокаркасу при помощи саморезов.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.
- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков, визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений;
- установить мебель в необходимом месте;
- провести уборку мебели с применением моющего средства.

11. Использование изделия

Использовать наборы мебели согласно своему функциональному назначению.

12. Техническое обслуживание

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.

Наружные поверхности мебели протирать влажной тряпкой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 или 0,5 % растворе моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

13. Транспортирование

13.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

13.2 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

13.3 Транспортирование допускается только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.), при этом колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным и умеренным климатом при температурах от минус 50 до +50° С (по условиям хранения 5 ГОСТ 15150).

14. Хранение

Условия хранения:

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %;
- Гарантийный срок хранения на складах поставщика не более 24 месяцев.

15. Утилизация

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.



16. Гарантийные сроки хранения

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне рыночном распределении - 24 месяца со дня получения ее потребителем.

Средний срок службы не менее 10 лет.

17. Чертежи и схемы мебели

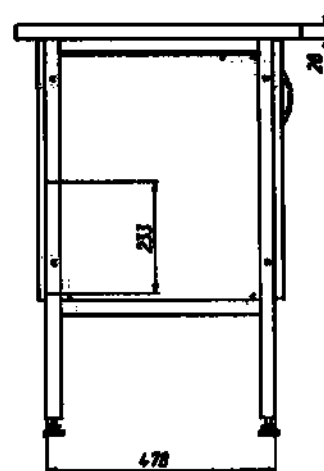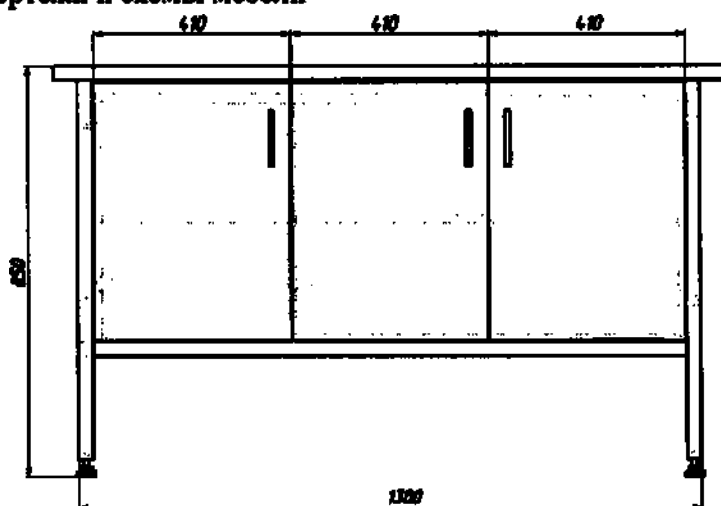

СМК-01г
Тумба лабораторная



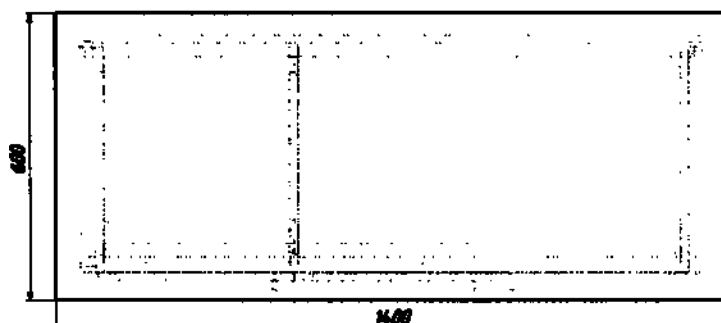


Рисунок 1

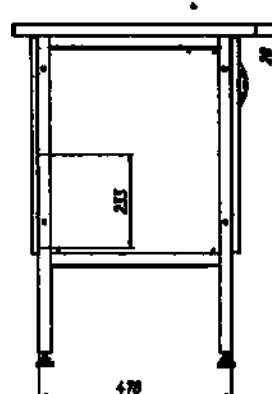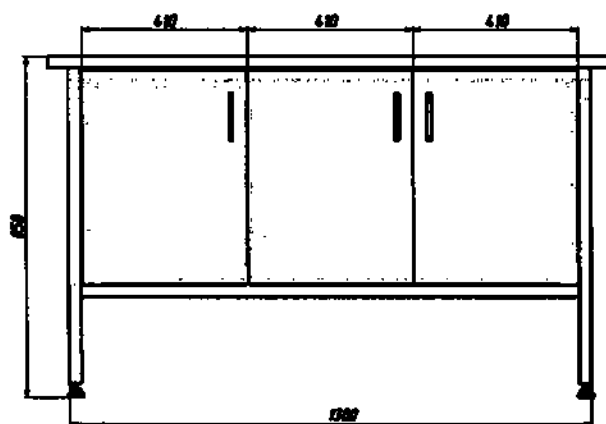

СМК-01л
Тумба лабораторная



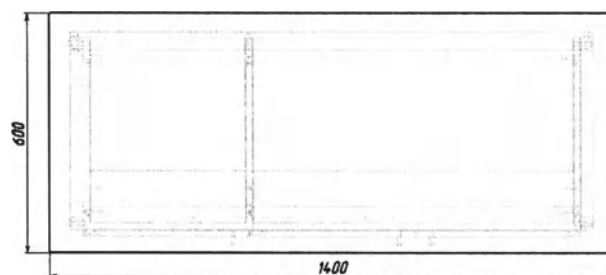


Рисунок 2

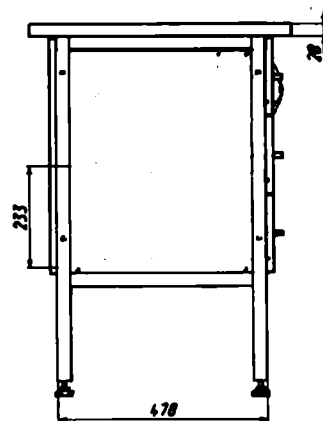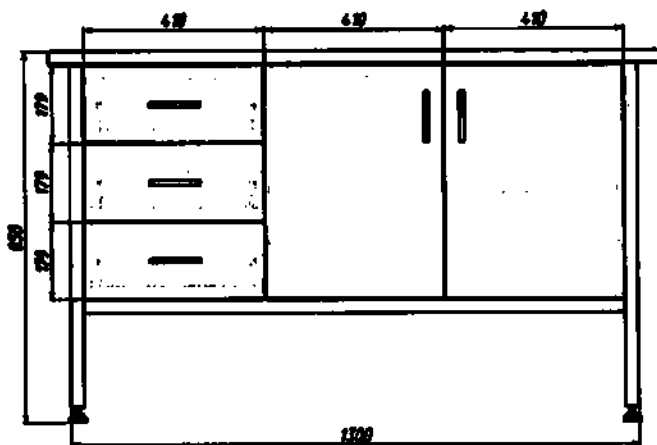

СМК-02г
Тумба лабораторная



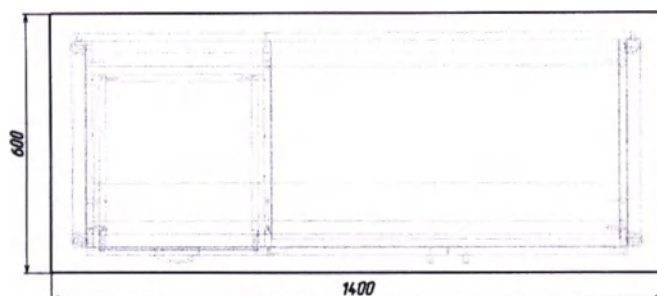


Рисунок 3

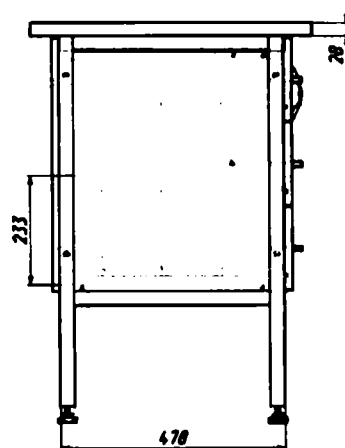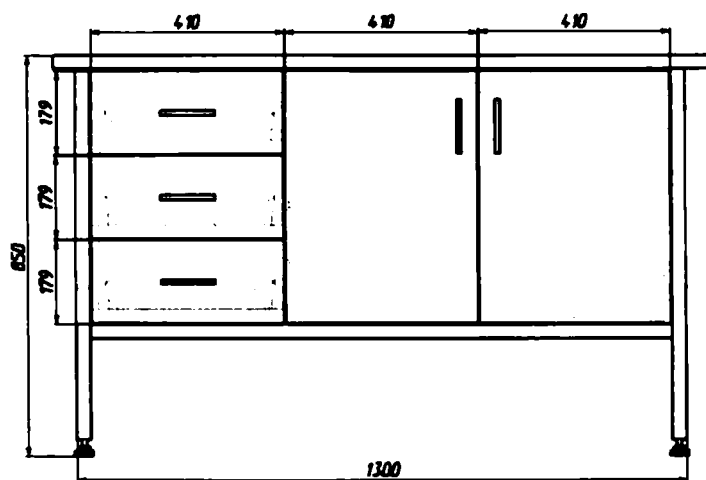

СМК-02ш
Тумба лабораторная



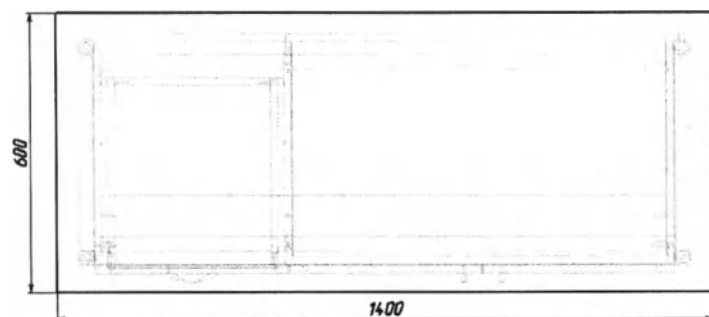


Рисунок 4

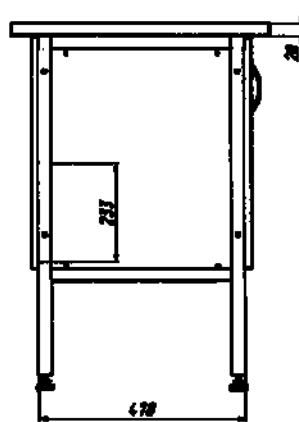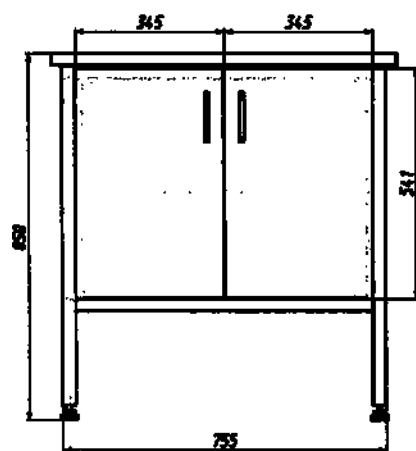

TMK-01z
Тумба лабораторная



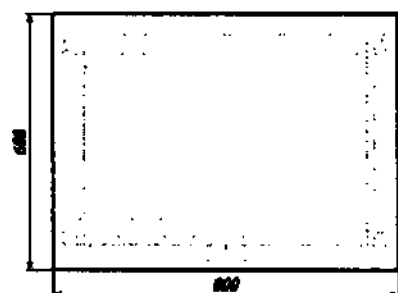


Рисунок 5

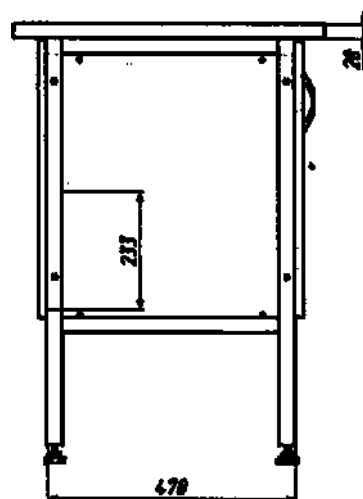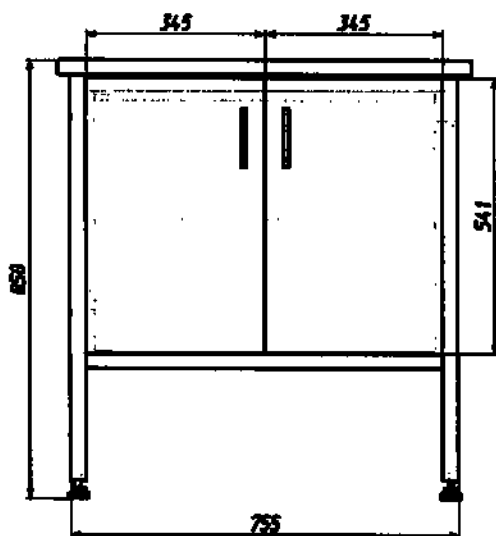

TMK-01w
Тумба лабораторная







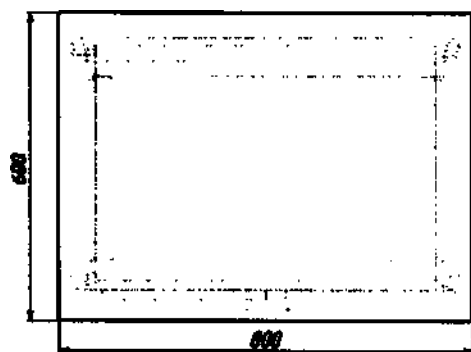


Рисунок 6

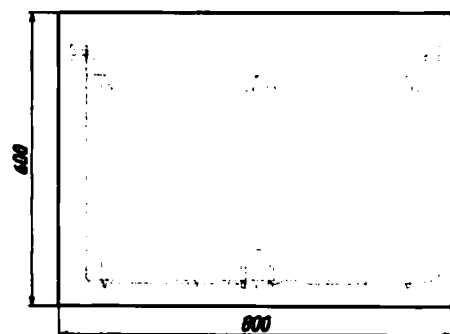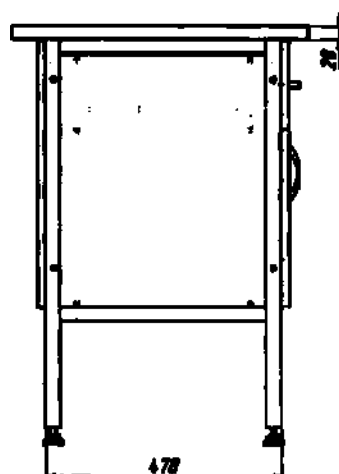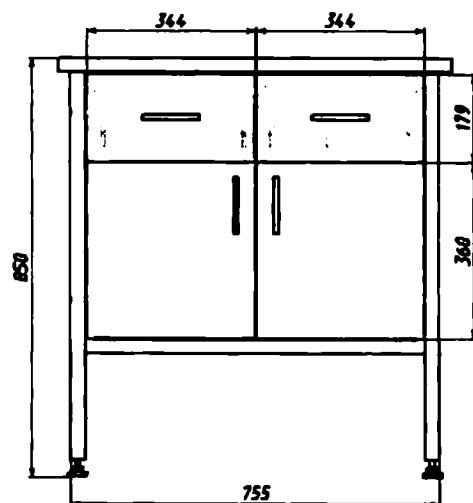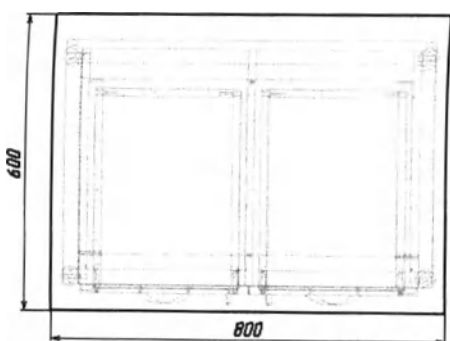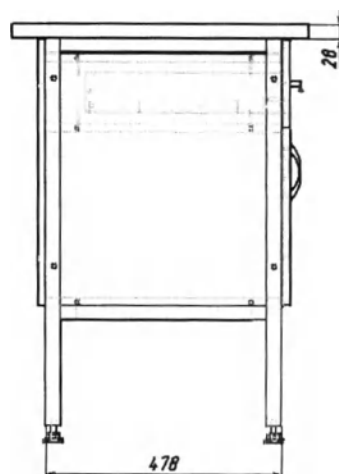




ТМК-02z
Тумба лабораторная

Рисунок 7

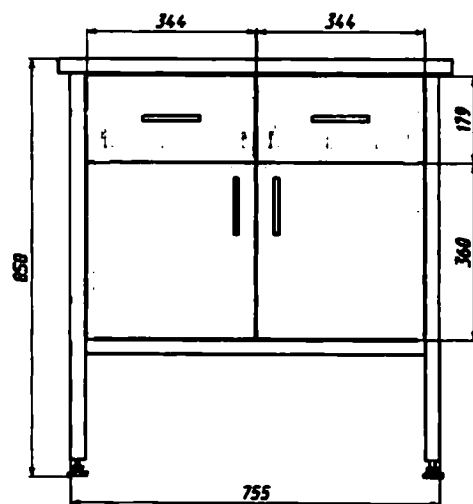




ТМК-02ш
Тумба лабораторная

Рисунок 6

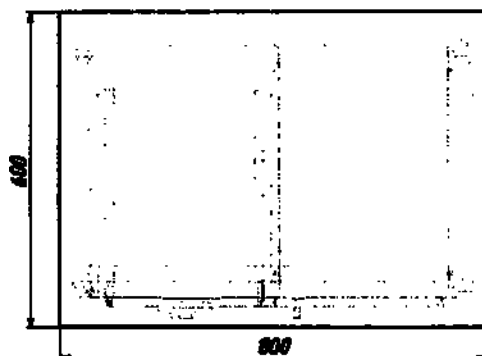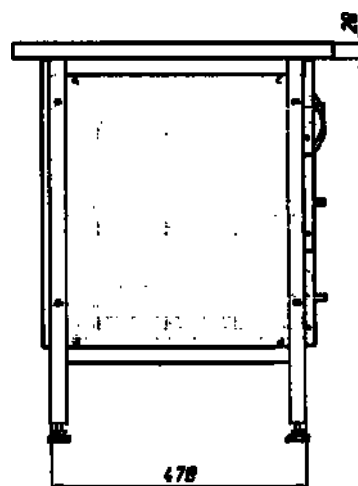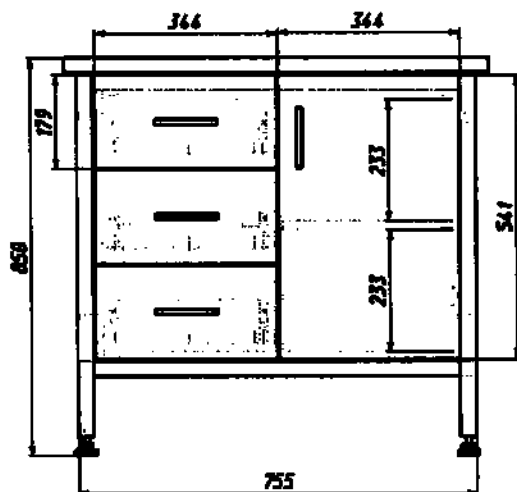

ТМК-032
Тумба лабораторная

Рисунок 7

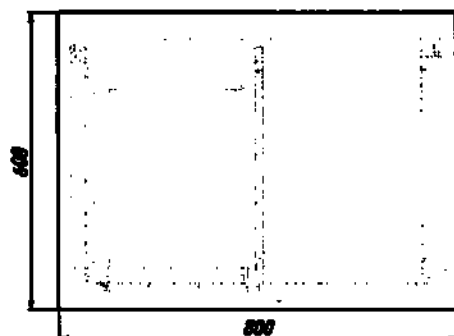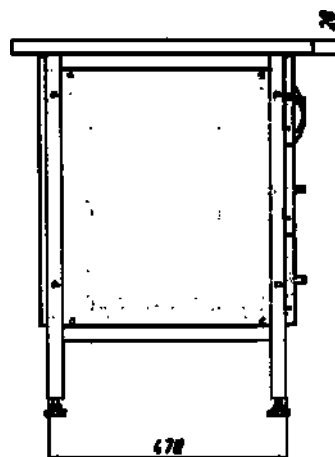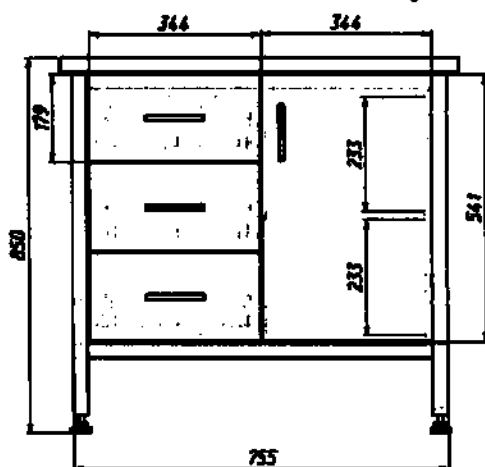

ТМК-03ш
Тумба лабораторная

Рисунок 8

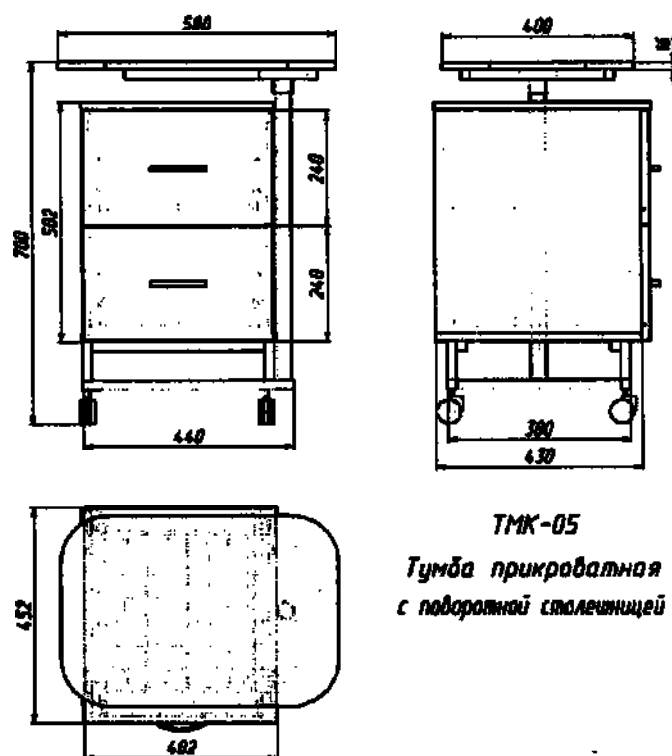


Рисунок 9

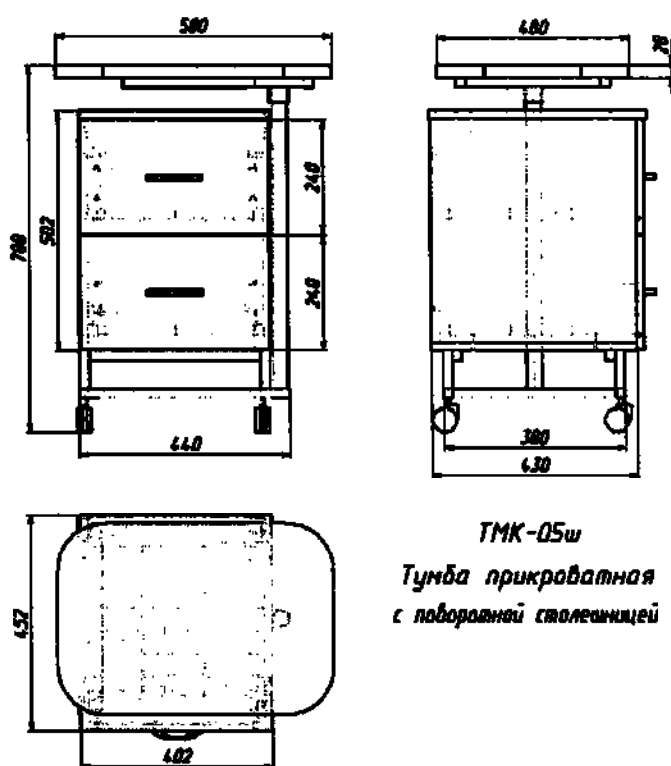


Рисунок 10

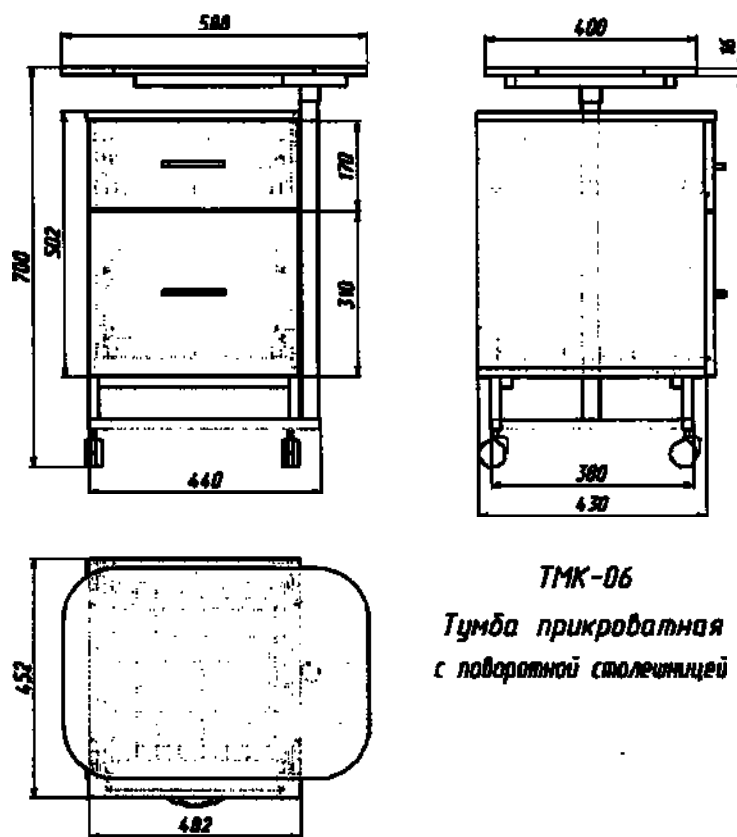


Рисунок 11

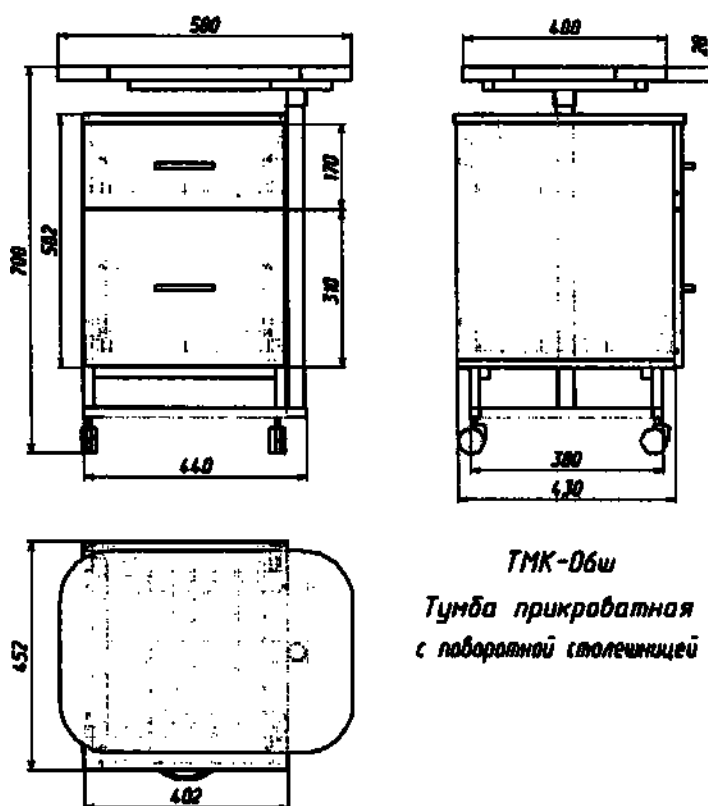


Рисунок 12

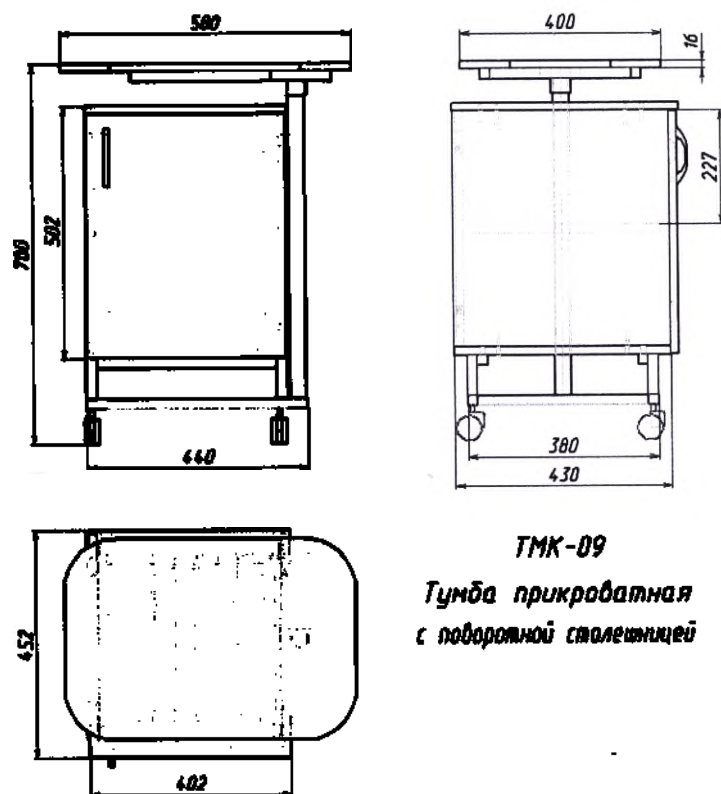


Рисунок 13

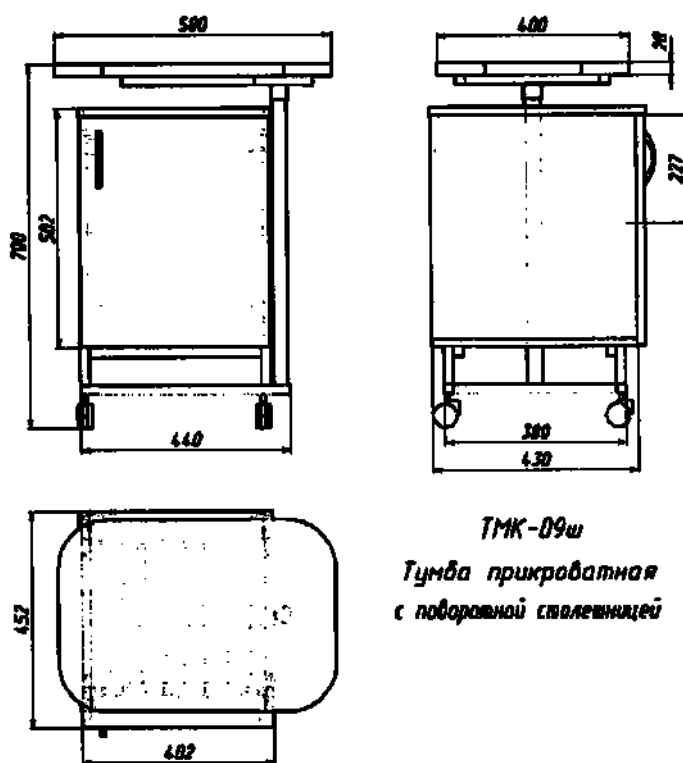


Рисунок 14

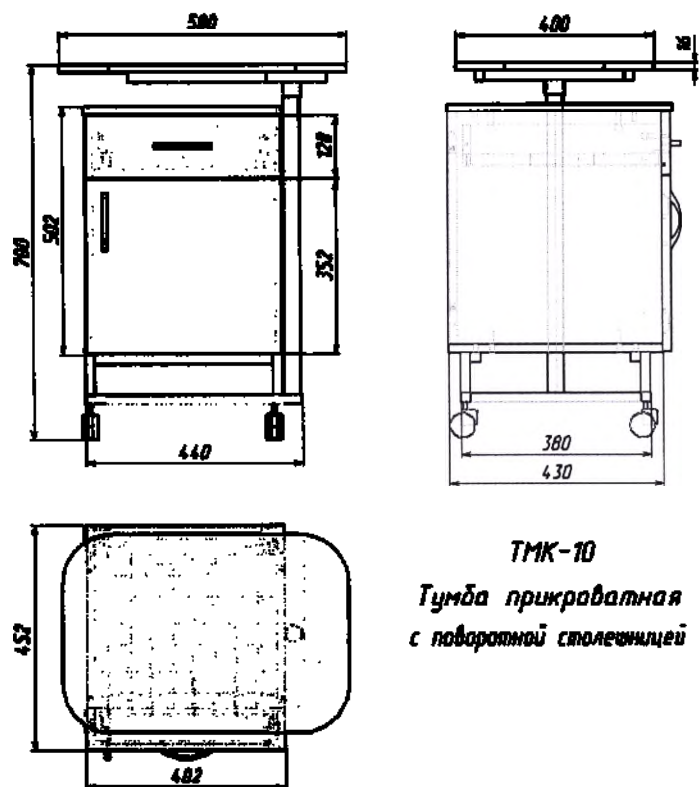


Рисунок 15

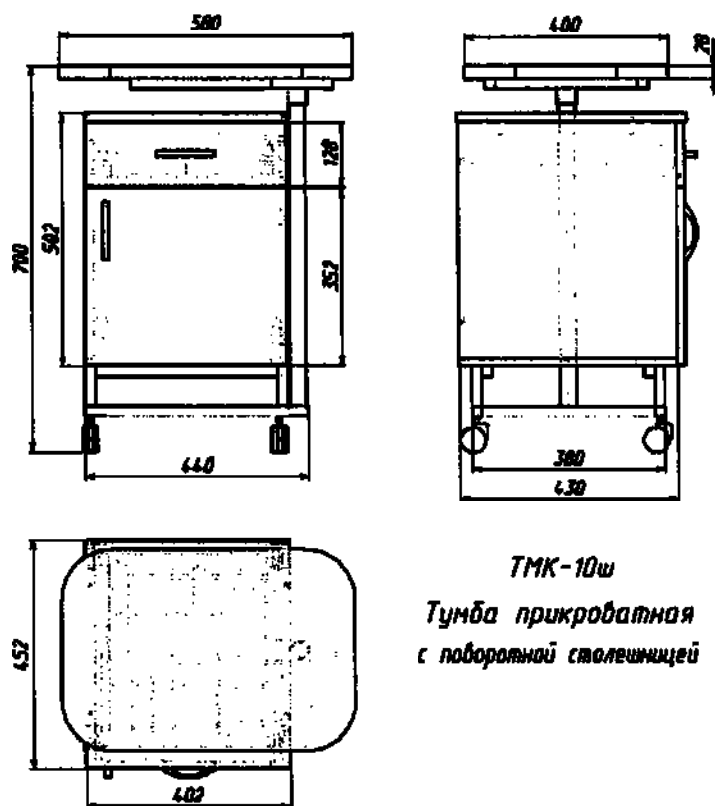


Рисунок 16

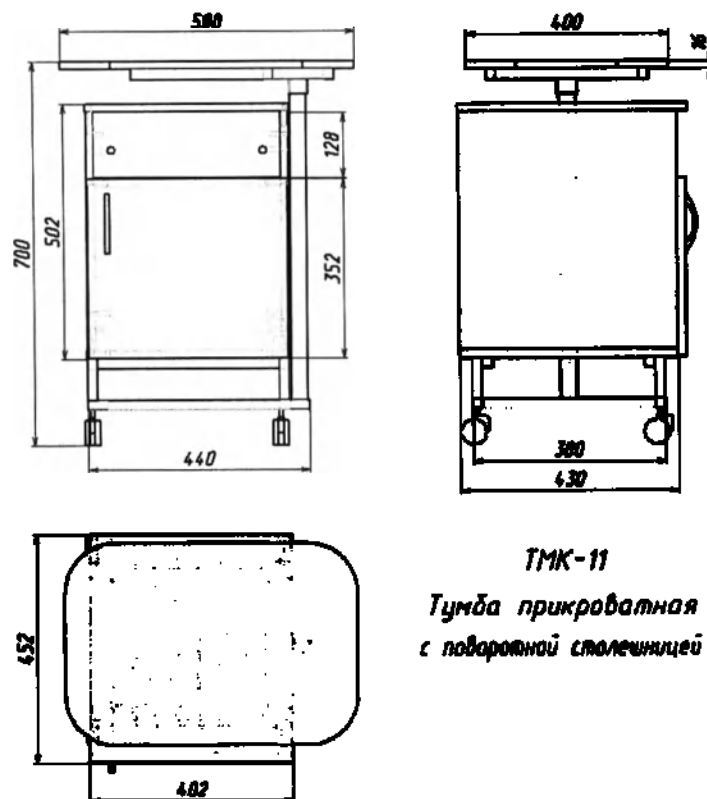


Рисунок 17

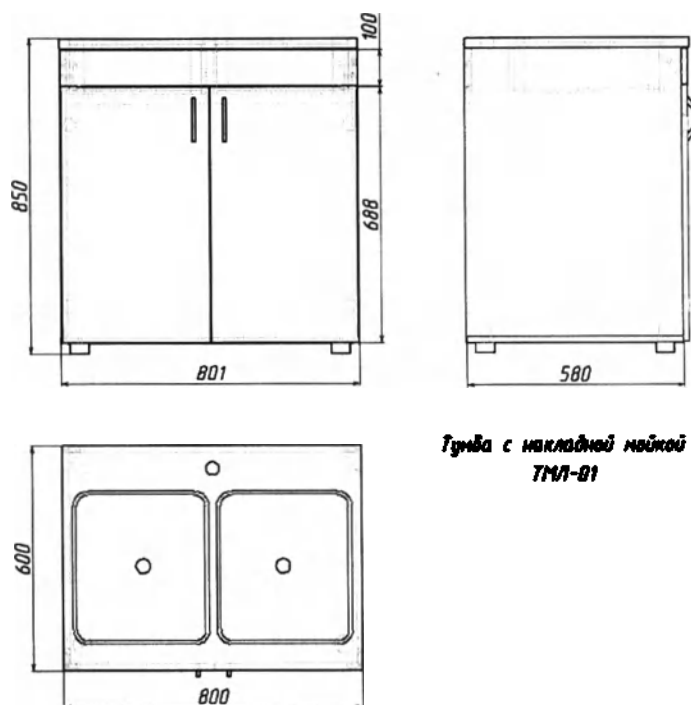


Рисунок 18

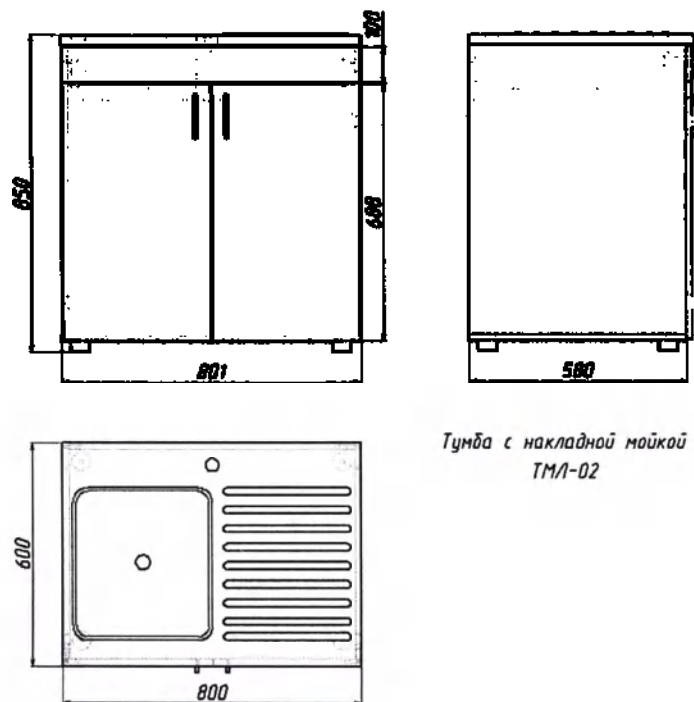


Рисунок 19

Контактные данные производителя

Общество с ограниченной ответственностью Мебельная фабрика «ОМЕТА»

620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б

Тел.: +7 (343) 311-22-27



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

19 (девятнадцать) листов(-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Директор Поляков А.А.

Подпись _____



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на медицинское изделие
Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018:
для оснащения поста медсестры

2018

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на наборы мебели медицинской (далее - наборы мебели), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

1. Назначение изделия: Предназначена для оборудования лечебных учреждений.

2. Область распространения: широкого применения.

3. Комплектация:

Вариант комплектации 1:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш, ТМЛ-01, ТМЛ-02

1. Паспорт ПС-СМК-01г – 1 шт.
2. Паспорт ПС-СМК-02ш – 1 шт.
3. Паспорт ПС-ТМК-01г – 1 шт.
4. Паспорт ПС-ТМК-02ш – 1 шт.
5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.
6. Паспорт ПС-ТМК-03ш – 1 шт.
7. Паспорт ПС-ТМЛ-01 – 1 шт.
8. Паспорт ПС-ТМЛ-02 – 1 шт.

Вариант комплектации 2:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01ш, СМК-02г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-03г;

1. Паспорт ПС-СМК-01ш – 1 шт.
2. Паспорт ПС-СМК-02г – 1 шт.
3. Паспорт ПС-ТМК-01ш – 1 шт.
4. Паспорт ПС-ТМК-02г – 1 шт.
5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.

Показания к применению

Наборы мебели медицинской предназначены для оборудования лечебных учреждений с целью обеспечения оснащения кабинетов и (или) палат, а также для операционных, процедурных кабинетов, медицинских лабораторий.

Противопоказания к применению



Мебель противопоказаний к применению не имеет.



4. Технические характеристики

Масса и габаритные размеры изделий

Обозначение	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
ТМЛ-02	800	600	850	35
ТМЛ-01	800	600	850	40
СМК-01г	1400	600	850	85
СМК-02ш	1400	600	850	90
ТМК-01г	800	600	850	50
ТМК-02ш	800	600	850	55
ТМК-03г	800	600	55	55
ТМК-03ш	800	600	55	55

Функциональные размеры:

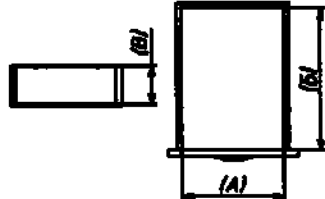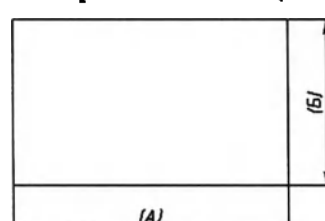	ТМК-01г	ТМК-01ш	ТМК-02г	ТМК-02ш	ТМК-03г	ТМК-03ш
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	-	-	A=266 B=384 B=80	A=266 B=384 B=80	A=266 B=384 B=80	A=266 B=384 B=80
Размеры столешницы, мм 	A=800 B=600	A=800 B=600	A=800 B=600	A=800 B=600	A=800 B=600	A=800 B=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460x660x233	460x660x233	480x660x339	480x660x339	460x322x233	460x322x233

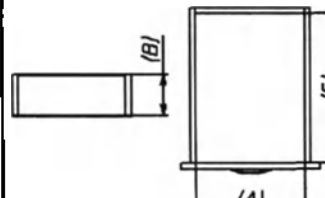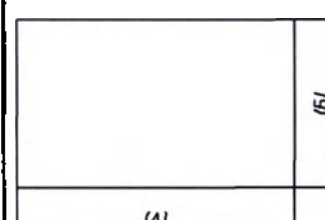	СМК-01г	СМК-01ш	СМК-02г	СМК-02ш	ТМЛ-01	ТМЛ-02
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	-	-	A=331 B=384 B=80	A=331 B=384 B=80	-	-
Размеры столешницы, мм 	A=1400 B=600	A=1400 B=600	A=1400 B=600	A=1400 B=600	A=800 B=600	A=800 B=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460x388x233	460x388x233	460x801x233	460x801x233	548x734x575	548x734x575
	460x801x233	460x801x233				

5. Материалы используемые при производстве наборов мебели:

5.1 Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

- ЛДСП 16мм марки Р-2 производства ООО «Увадрев Холдинг», Россия;

5.2 Детали из древесных плит должны быть облицованы:

- детали щитовые декоративные на основе древесных плит: столешницы класс эмиссии формальдегида Е1 производства ООО «СоюзБалтКомплект» Россия по СТО 5367-001-50012764-2007;

- кромка декоративная: для столешниц и плинтуса производства ООО «СоюзБалтКомплект», Россия, по СТО 569430-007-2012.

- кромка мебельная ПВХ толщиной 2мм и 0,4мм производства GP-Plast код ОКП 224520, Китай.

5.3 Для окраски металлокаркаса применяется краска RAL 7035 производства Flycoat, Италия.

5.4 Детали из стекла производства ОАЛ «Салават-стекло» по ГОСТ 111-92.

5.5 Трубы металлокаркаса 20*20,25*25,30*30 мм, производства Первоуральского Новотрубного завода по ГОСТ 863р-82в/ГОСТ13663-86.

5.6 Ручки-скоба (лицевая фурнитура), производство ООО «Боярд».

5.7 Винилискожа, производства Нижнекамского завода искусственных кож по ГОСТ 1111-96.

5.8 Кожа искусственная Skaden, производства Бельгия.

6. Устройство и работа

6.1 Тумбы:

Тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде.

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.

- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.

- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.

- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.

- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.

- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.

- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.

- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков.

Двери изделий имеют петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

(Н102А02).

Изделия не имеют комбинированную дверь из металла и стекла.

7. Маркировка

Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование и обозначение исполнения мебели;

- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- обозначение настоящих технических условий;

- юридический адрес производителя;

- наименование страны изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя;

- год и месяц выпуска;

- гарантийный срок;

- срок службы, установленный изготовителем.

Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

8. Упаковка

Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации;

При транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

Водным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (защитные) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвигания при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

Упаковывание, транспортирование и хранение стеклонизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

9. Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения:

мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);

беречь от ударов, падения, битья и иного злоумышленного нерационального физического воздействия;

беречь от открытого огня;

не использовать мебель по иному назначению;

- необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия влаги и тепла,

не нагружать столешницу более чем указано выше.

наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или

1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

10. Подготовка изделия к использованию (включая инструкцию по сборке):

Тумбы:

Вскрыть упаковку, достать детали (тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.
- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.
- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.
- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.
- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.
- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.
- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.
- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков, визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений;
- установить мебель в необходимом месте;
- провести уборку мебели с применением моющего средства.

11. Использование изделия

Использовать наборы мебели согласно своему функциональному назначению.

12. Техническое обслуживание

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.

Наружные поверхности мебели протирать влажной тряпкой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 или 0,5 % растворе моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

13. Транспортирование

13.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

13.2 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта

13.3 Транспортирование допускается только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.), при этом колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным и умеренным климатом при температурах от минус 50 до +50°C (по условиям хранения 5 ГОСТ 15150).

14. Хранение

Условия хранения:

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %;
- Гарантийный срок хранения на складах поставщика не более 24 месяцев.

15. Утилизация

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.

16. Гарантийные сроки хранения

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерыночном распределении - 24 месяца со дня получения ее потребителем. Средний срок службы не менее 10 лет.

17. Чертежи и схемы мебели:



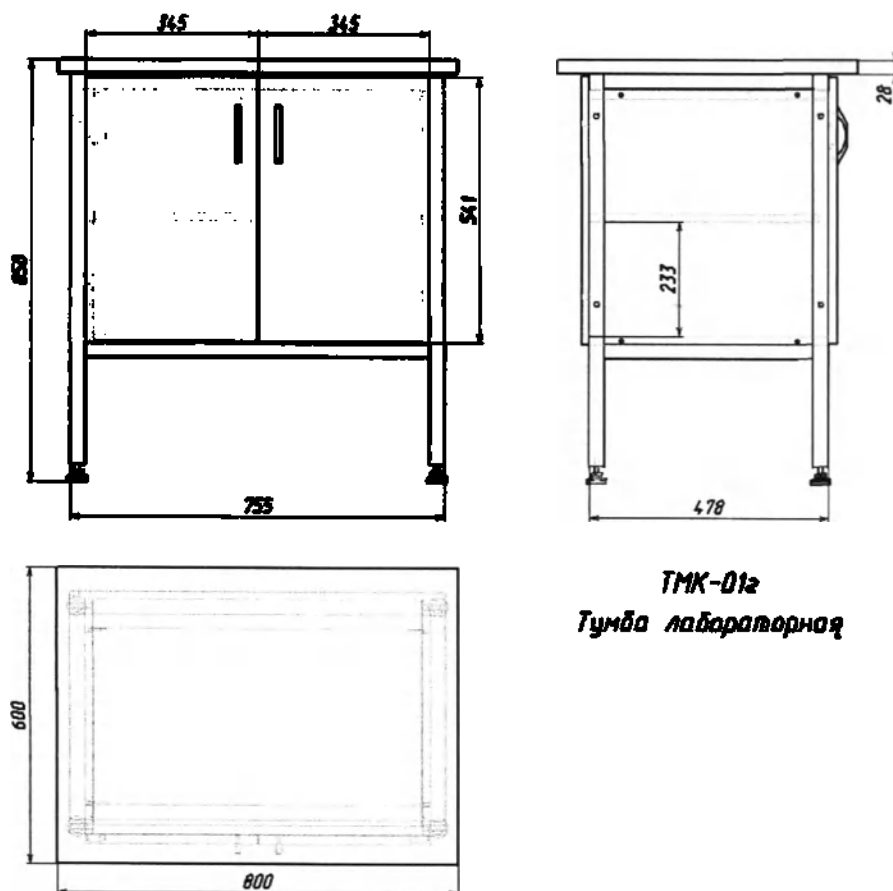


Рисунок 1

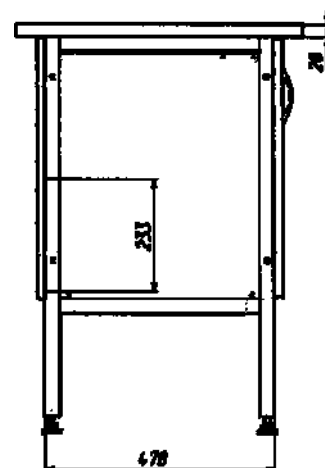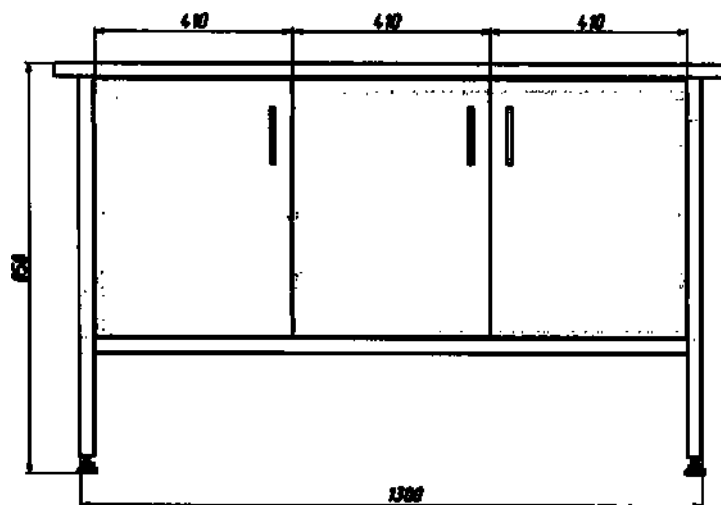

СМК-01г
Тумба лабораторная



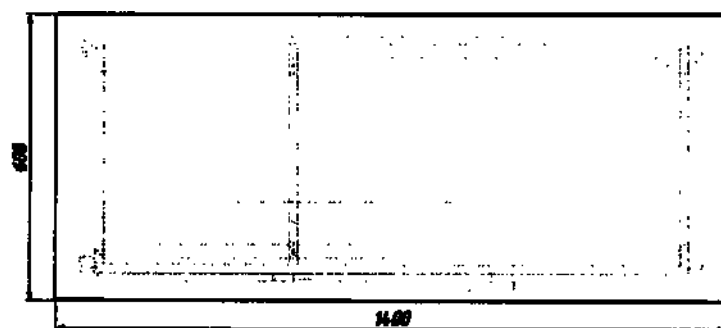


Рисунок 2

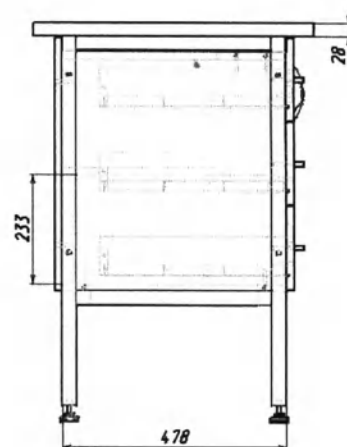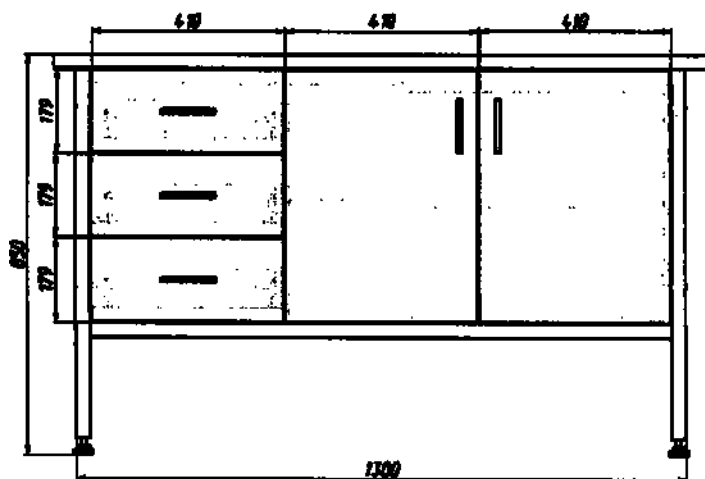

СМК-02ш
Тумба лабораторная







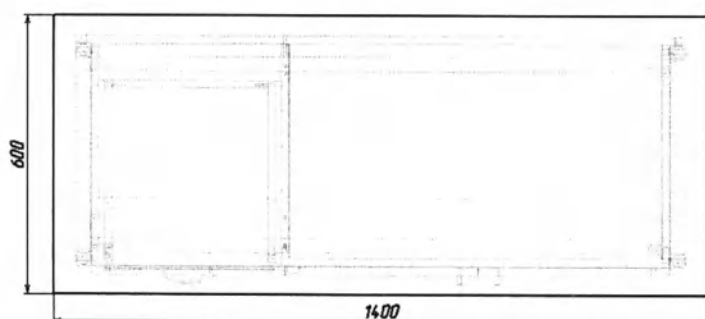


Рисунок 3

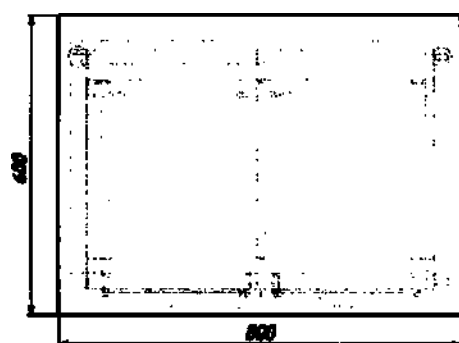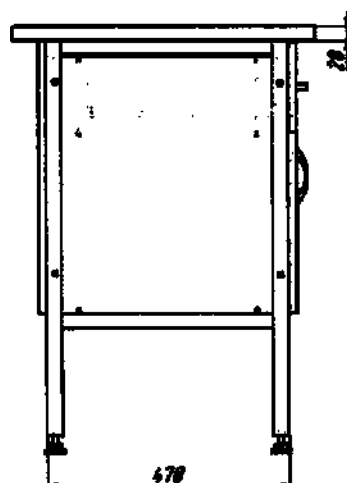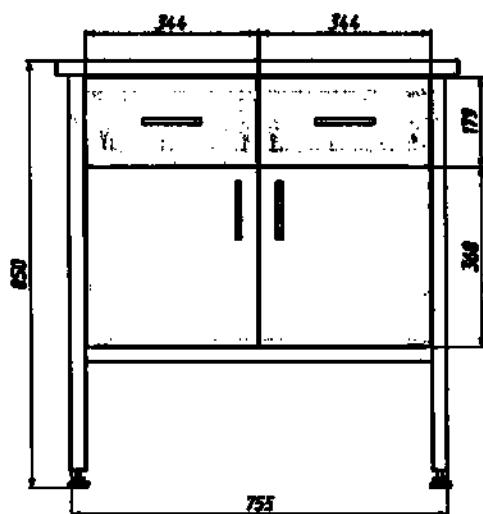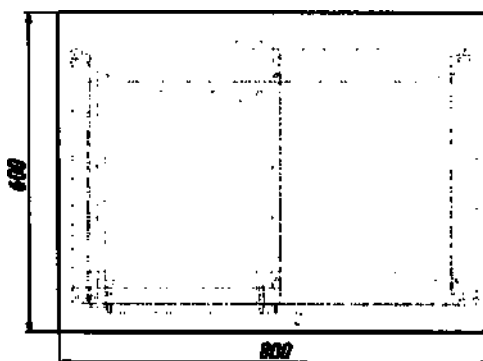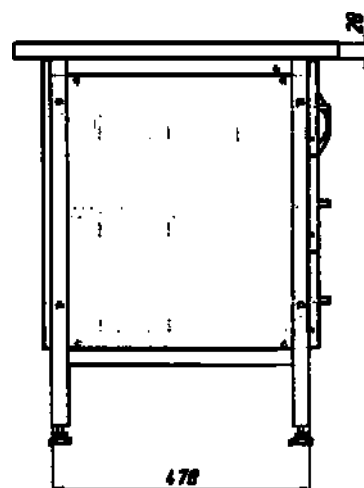


TMK-02ш
Тумба лабораторная

Рисунок 4

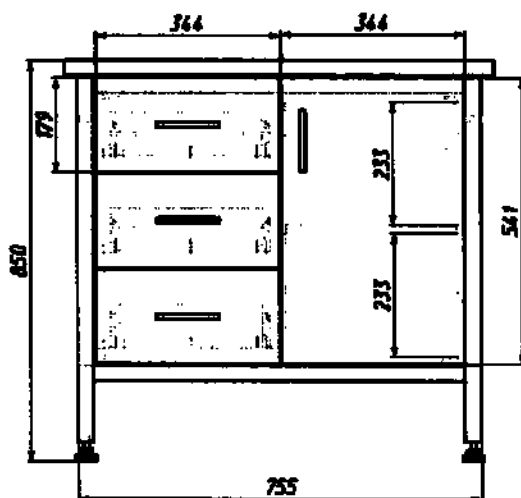


TMK-03г
Тумба лабораторная

Рисунок 5

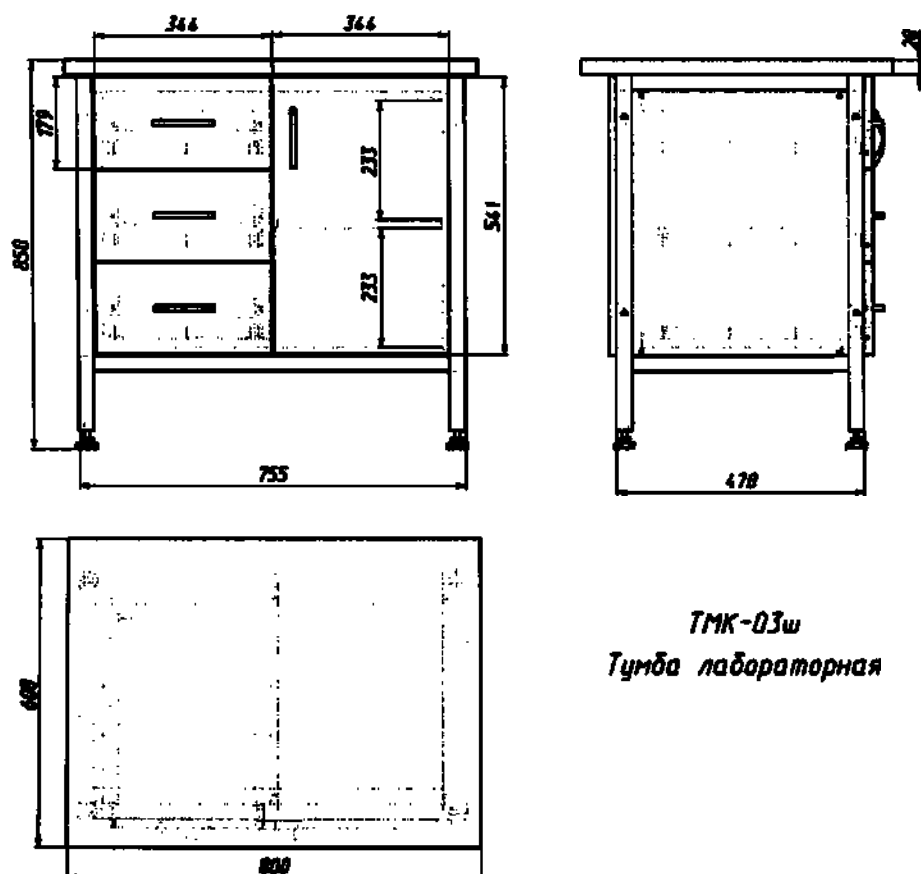

ТМК-03ш
Тумба лабораторная

Рисунок 6

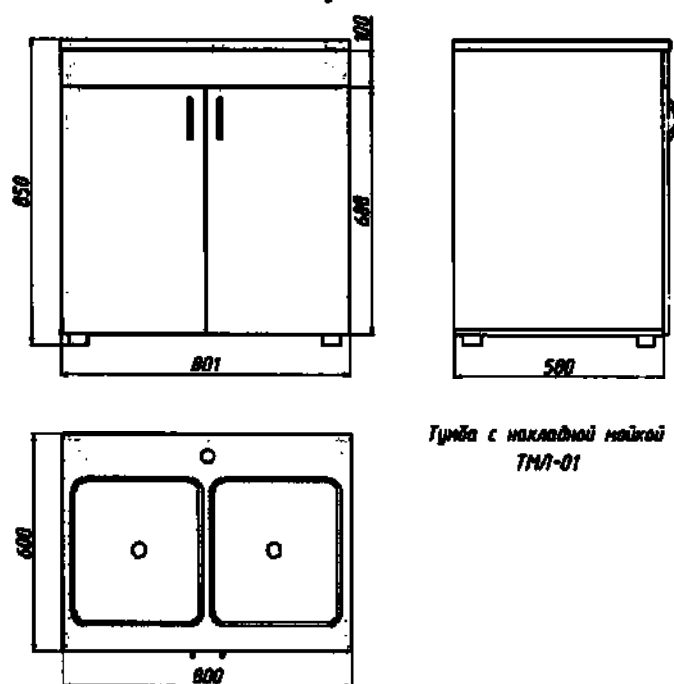

Тумба с накладной мойкой
ТМЛ-01

Рисунок 7

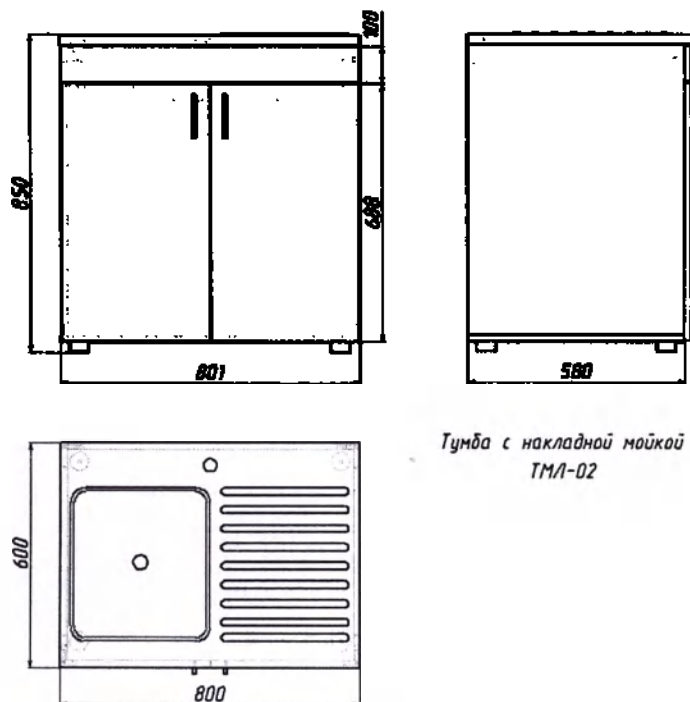


Рисунок 8

Контактные данные производителя

Общество с ограниченной ответственностью Мебельная фабрика «ОМЕТА»

620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б

Тел.: +7 (343) 311-22-27



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

11 (одиннадцать) листов(-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Директор Поляков А.А.

Подпись _____



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на медицинское изделие
Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018:
оснащения процедурного кабинета

2018

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на наборы мебели медицинской (далее - наборы мебели), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

1. Назначение изделия: Предназначена для оборудования лечебных учреждений.

2. Область распространения: широкого применения.

3. Комплектация:

1. Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018 для оснащения процедурного кабинета

Вариант комплектации 1:

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Ширма медицинская, варианты исполнения: ШМ-2, ШМ-3;
 - 1. Паспорт ПС-ШМ-2 - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-ШМ-3 - 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-02н, СИ-03п;
 - 1. Паспорт ПС-СИ-02н - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СИ-03п - 1 шт.
- Стол пеленальный медицинский, варианты: СП-02, СП-03;
 - 1. Паспорт ПС-СП-02 - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СП-03 - 1 шт.
- Кушетка медицинская, варианты исполнения: КС-01, КФ, КФ-1, КФ-2, КС-01у, КС-01л, КФ-3
 - 1. Паспорт ПС-КС-01 - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-КФ - 1 шт.
 - 3. Паспорт ПС-КФ-1 - 1 шт.
 - 4. Паспорт ПС-КФ-2 - 1 шт.
 - 5. Паспорт ПС-КС-01у - 1 шт.
 - 6. Паспорт ПС-КС-01л - 1 шт.
 - 7. Паспорт ПС-КФ-3 - 1 шт.
- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш, ТМЛ-01, ТМЛ-02
 - 1. Паспорт ПС-СМК-01г - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СМК-02ш - 1 шт.
 - 3. Паспорт ПС-ТМК-01г - 1 шт.
 - 4. Паспорт ПС-ТМК-02ш - 1 шт.
 - 5. Паспорт ПС-ТМК-03г - 1 шт.
 - 6. Паспорт ПС-ТМК-03ш - 1 шт.
 - 7. Паспорт ПС-ТМЛ-01 - 1 шт.
 - 8. Паспорт ПС-ТМЛ-02 - 1 шт.

Вариант комплектации 2:

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Ширма медицинская, варианты исполнения: ШМ-2;
 - 1. Паспорт ПС-ШМ-2 - 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-03н, СИ-03п;
 - 1. Паспорт ПС-СИ-03н - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-СИ-03п - 1 шт.
- Кушетка медицинская, варианты исполнения КС-01, КФ, КФ-1, КФ-2, КС-01у, КС-01л, КФ-3
 - 1. Паспорт ПС-КС-01 - 1 шт.
 - 2. Паспорт ПС-КФ - 1 шт.
 - 3. Паспорт ПС-КФ-1 - 1 шт.
 - 4. Паспорт ПС-КФ-2 - 1 шт.
 - 5. Паспорт ПС-КС-01у - 1 шт.
 - 6. Паспорт ПС-КС-01л - 1 шт.

7. Паспорт ПС-КФ-3 – 1 шт.
- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01ш, СМК-02г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-03г;
 1. Паспорт ПС-СМК-01ш – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СМК-02г – 1 шт.
 3. Паспорт ПС-ТМК-01ш – 1 шт.
 4. Паспорт ПС-ТМК-02г – 1 шт.
 5. Паспорт ПС-ТМК-03г – 1 шт.

Вариант комплектации 3:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-02н, СИ-02п;
 1. Паспорт ПС-СИ-02н – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СИ-02п – 1 шт.
- Стол пеленальный медицинский, варианты: СП-01, СП-02;
 1. Паспорт ПС-СП-01 – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СП-02 – 1 шт.
- Тумба медицинская, варианты исполнения: СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г
 1. Паспорт ПС-СМК-01г – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СМК-01ш – 1 шт.
 3. Паспорт ПС-СМК-02г – 1 шт.
 4. Паспорт ПС-СМК-02ш – 1 шт.
 5. Паспорт ПС-ТМК-01г – 1 шт.
 6. Паспорт ПС-ТМК-01ш – 1 шт.
 7. Паспорт ПС-ТМК-02г – 1 шт.

Вариант комплектации 4:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Стол инструментальный медицинский, варианты исполнения: СИ-02н, СИ-03н, СИ-02п, СИ-03п;
 1. Паспорт ПС-СИ-02н – 1 шт.
 2. Паспорт ПС-СИ-03н – 1 шт.
 3. Паспорт ПС-СИ-03п – 1 шт.
 4. Паспорт ПС-СИ-02п – 1 шт.

Показания к применению

Наборы мебели медицинской предназначены для установки в лечебных учреждениях с целью оснащения кабинетов и (или) палат, а также для операционных, процедурных кабинетов, медицинских лабораторий.

Противопоказания к применению

Мебель противопоказаний к применению не имеет.

5. Технические характеристики:



Масса и габаритные размеры изделий:



Обозначение	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
ШМ-2	1400	350	1770	13
ШМ-3	2100	350	1770	17
СИ-02п	630	460	880	20
СИ-02н	630	460	880	20
СИ-03н	630	460	880	25
СИ-03п	630	460	880	25
СП-01	850	700	980	40
СП-02	850	750	980	40
СП-03	850	750	980	40
КС-01	1950	600	550	30



КФ	1950	600	550	40
КФ-1	2000	650	600	95
КФ-2	2000	650	600	50
КС-01у	1950	600	550	35
КС-01л	2000	650	600	35
КФ-3	2000	650	600	40
СМК-01г	1400	600	850	85
СМК-01ш	1400	600	850	85
СМК-02г	1400	600	850	90
СМК-02ш	1400	600	850	90
ТМК-01г	800	600	850	50
ТМК-01ш	800	600	850	50
ТМК-02г	800	600	850	55
ТМК-02ш	800	600	850	55
ТМК-03г	800	600	55	55
ТМК-03ш	800	600	55	55
ТМЛ-01	800	600	850	40
ТМЛ-02	800	600	850	35

Функциональные размеры:

	ШМ-2	ШМ-3
Внутренние размеры (ШхВ), в мм	680х1575	680х1575

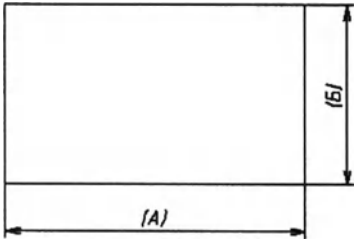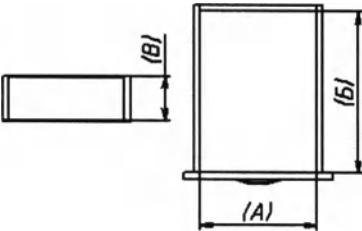	КС-01	КФ	КФ-1	КФ-2	КС-01у	КС-01л	КФ-3
Размеры ложа, мм	A=1950 B=600	A=1960 B=600	A=2000 B=650	A=2000 B=650	A=1950 B=600	A=2000 B=650	A=2000 B=650
							
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	-	-	A=411 B=484 B=80 A=411 B=484 B=100 A=411 B=484 B=150	-	-	-	-
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	-	-	-	300х17 46х303	-	-	-

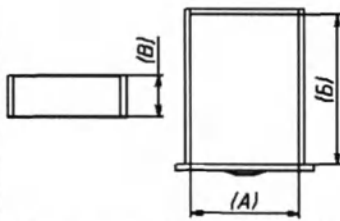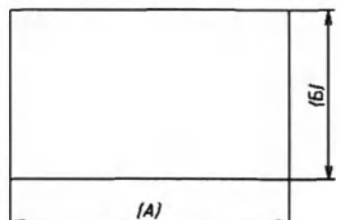	CMK-01г	CMK-01ш	CMK-02г	CMK-02ш	ТМЛ-01	ТМЛ-02
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	-	-	A=331 Б=384 В=80	A=331 Б=384 В=80	-	-
Размеры столешницы, мм 	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=1400 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460x388 x233 460x801 x233	460x388x 233 460x801x 233	460x801x 233	460x801x 233	548x734x 575	548x734x 575

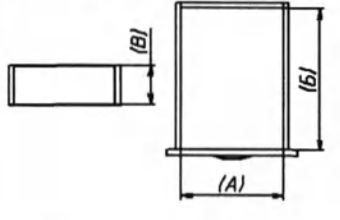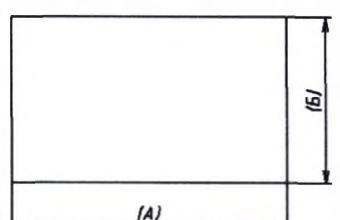	ТМК-01г	ТМК-01ш	ТМК-02г	ТМК-02ш	ТМК-03г	ТМК-03ш
Внутренние размеры ящиков, в мм вид спереди вид сверху 	-	-	A=266 Б=384 В=80	A=266 Б=384 В=80	A=266 Б=384 В=80	A=266 Б=384 В=80
Размеры столешницы, мм 	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600	A=800 Б=600
Внутренние размеры отделений (открытых и закрытых) (ДхШхВ), в мм	460x660 x233	460x660 x233	480x660 x339	480x660 x339	460x322 x233	460x322 x233

	СИ-02н	СИ-02п	СИ-03н	СИ-03п
Общий вид стола, размеры в мм	A=880	A=880	A=880	A=880
вид спереди	Б=580	Б=580	Б=580	Б=580
вид сбоку	В=410	В=410	В=410	В=410
(Д)	Г=380	Г=380	Г=280	Г=280
(Г)	Д=110	Д=110	Д=110	Д=110
(В)				

	СП-01	СП-02	СП-03
Общий вид стола, размеры в мм	A=818	A=830	A=790
вид спереди	Б=438	Б=434	Б=434
вид сбоку	В=310	В=230	В=230
(Г)	Г=200	Г=184	Г=164
(В)	Д=733	Д=750	Д=750
(Б)	Е=683	Е=645	Е=645

5. Материалы используемые при производстве наборов мебели:

5.1 Для изготовления изделий мебели основными материалами служат:

- Л ДСП 16мм марки Р-2 производства ООО «Увадрев Холдинг», Россия;

5.2 Детали из древесных плит должны быть облицованы:

- детали щитовые декоративные на основе древесных плит: столешницы класс эмиссии формальдегида Е1 производства ООО «СоюзБалтКомплект» Россия по СТО 5367-001- 50012764-2007;

- кромка декоративная: для столешниц и плинтуса производства ООО «СоюзБалтКомплект», Россия, по СТО 569430-007-2012.

- кромка мебельная ПВХ толщиной 2мм и 0,4мм производства GP-Plast код ОКП 224520, Китай.

5.3 Для окраски металлокаркаса применяется краска RAL 7035 производства Fluscoat, Италия.

5.4 Детали из стекла производства ОАЛ «Салават-стекло» по ГОСТ 111-92.

5.5 Трубы металлокаркаса 20*20,25*25,30*30 мм, производства Первоуральского Новотрубного завода по ГОСТ 863р-82в/ГОСТ13663-86.

5.6 Ручки-скоба (лицевая фурнитура), производство ООО «Боярд».

5.7 Винилискожа, производства Нижнекамского завода искусственных кож по ГОСТ 1111- 96.

5.8 Кожа искусственная Skaden, производства Бельгия.

6. Устройство и работа:

6.1 Кушетки:

Мебель поставляется в собранном виде, кроме кушеток: КС-01, КС-01у. Вкладные и накладные элементы закреплены неподвижно.

Сборка кушеток КС-01 и КС-01у: ложе закрепить на металлические опоры при помощи болтов и гаек.

Изделия мебели не имеют дверей и не имеют роликовых (колесных) опор.

Изделия мебели установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

6.2 Столы:

Пеленальные столы СП-02, СП-03 поставляется в собранном виде. Вкладные и накладные элементы закреплены неподвижно. Остальные столы поставляются в разобранном виде и собираются при помощи:

Пеленальные столы СП-01:

Задняя стенка, полка стяжная и ложе закрепляются между боковыми стенками при помощи евровинтов.

Изделия мебели (СИ-02н, СИ-02п, СИ-03п, СИ-03н), установленные на роликовые (колесные) опоры (Колёсная опора 68 мм (с болтом) D50) должны:

- иметь свободный ход по поверхности пола при усилении;
- стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний.

Изделия мебели установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

6.3 Тумбы:

Тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде.

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов:

- заднюю стенку с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.
- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.
- сверху притягивать крышку на шканты и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.
- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.
- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.
- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.
- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.

- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков.

Двери изделий имеют петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание. (Н102А02).

Изделия не имеют комбинированную дверь из металла и стекла.

- иметь свободный ход по поверхности пола при усилении;
- стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачиваний.

Изделия мебели установленные на опоры стоят на горизонтальной плоскости устойчиво, без раскачиваний.

7. Маркировка

Каждое изделие мебели имеет маркировку на русском языке.

Маркировка выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию мебели.

Маркировка содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и обозначение исполнения мебели;
- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- юридический адрес производителя;

- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- год и месяц выпуска;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем.

Маркировка наносится:

- на верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.

8. Упаковка

Мебель упакована:

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации;

При транспортировании в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

Водным транспортом - в соответствии с ГОСТ 15846.

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

Вся съемная фурнитура изделий мебели упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

Упаковывание, транспортирование и хранение стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: «Верх» на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их в любом положении, в том числе попарно.

При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

9. Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения:

мебель нельзя использовать, если она имеет механические повреждения (расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, вырывы, вмятины, трещины, пятна, заусенцы и морщины и другие дефекты);

беречь от ударов, падения, битья и иного злоумышленного неадекватного физического воздействия;

беречь от открытого огня;

не использовать мебель по иному назначению;

- необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия влаги и тепла, не нагружать столешницу более чем указано выше.

наружные поверхности устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

10. Подготовка изделия к использованию (включая инструкцию по сборке):

Столы:

вскрыть упаковку, достать детали (пеленальные столы СП-02, СП-03 поставляется в собранном виде), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

1. Пеленальные столы СП-01:

Задняя стенка, полка стяжная и ложе закрепляются между боковыми стенками при помощи евровинтов.

2. Столы инструментальные собираются при помощи винтов и гаек. Полки из стекла устанавливаются на полкодержатели в металлические рамки, металлические полки крепятся к опорам (стойкам) при помощи винтов и гаек. К опорам (стойкам) закрепляют колесные опоры. визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений; установить мебель в необходимом месте; провести уборку мебели с применением моющего средства.

Тумбы:

Вскрыть упаковку, достать детали (тумбы СМК-01г, СМК-01ш, СМК-02г, СМК-02ш, ТМК-01г, ТМК-01ш, ТМК-02г, ТМК-02ш, ТМК-03г, ТМК-03ш поставляются в собранном виде), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

Тумбы, поставляемые в разобранном виде, собираются при помощи евровинтов, эксцентриковых стяжек и щкантов:

- заднюю стенку с помощью щкантов и эксцентриковых стяжек крепить между боковыми стенками.
- крепить к дну боковые стенки с помощью евровинтов.
- сверху притягивать крышку на щканы и эксцентриковые стяжки к боковым стенкам.
- съемные полки устанавливаются между опорами на металлические полкодержатели.
- ящики собираются из боковин и задней стенки на евровинты, прибивается дно ящика на гвозди и устанавливаются на направляющие между опорами.
- изделия на ножках устанавливаются на регулируемые опоры.
- фасады устанавливаются на петли.

Тумбы ТМЛ-01 и ТМЛ-02:

- монтажными планками с помощью щкантов и эксцентриковых стяжек стянуть боковые стенки по задним и передним сторонам тумбы. При этом планки должны располагаться в верхней части тумбы.
- накладную мойку закрепить к корпусу тумбы при помощи прижимных уголков, визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений; установить мебель в необходимом месте; провести уборку мебели с применением моющего средства.

Кушетки:

вскрыть упаковку, достать мебель (мебель поставляется в собранном виде, кроме кушеток: КС-01, КС-01 у), принадлежности для установки и эксплуатационные документы;

сборка кушеток КС-01 и КС-01у: ложе закрепить на металлические опоры при помощи болтов и гаек.

визуально проверить мебель в собранном состоянии на наличие механических повреждений; установить мебель в необходимом месте; провести уборку мебели с применением моющего средства.

11. Использование изделия:

Использовать наборы мебели согласно своему функциональному назначению.

12. Техническое обслуживание:

Проводить влажную уборку с использованием моющего средства по мере необходимости.
Наружные поверхности мебели протирать влажной тряпкой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 или 0,5 % растворе моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

13. Транспортирование:

13.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

13.2 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

13.3 Транспортирование допускается только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.), при этом колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным и умеренным климатом при температурах от минус 50 до +50°C (по условиям хранения 5 ГОСТ 15150).

14. Хранение:

Условия хранения;

- изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %;

Гарантийный срок хранения на складах поставщика не более 24 месяцев.

15. Утилизация:

Изделия мебели после вывода из эксплуатации утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" для крупногабаритных отходов класса А.

16. Гарантийные сроки хранения:

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерыночном распределении - 24 месяца со дня получения ее потребителем.

Средний срок службы не менее 10 лет.

17. Чертежи и схемы мебели:

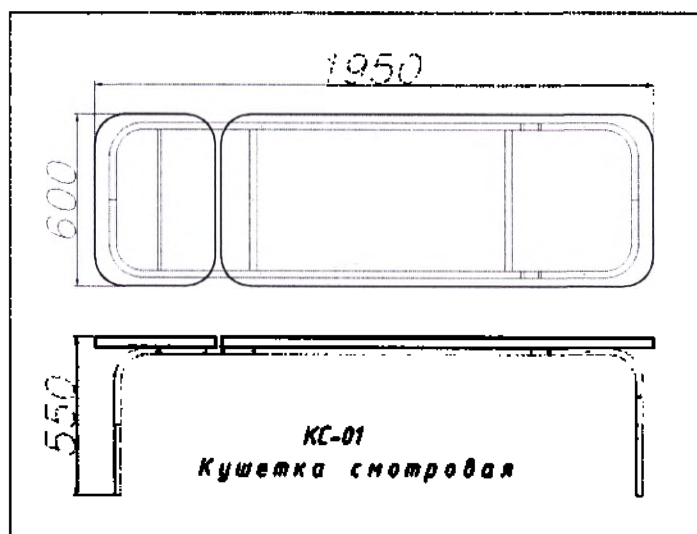


Рисунок 1

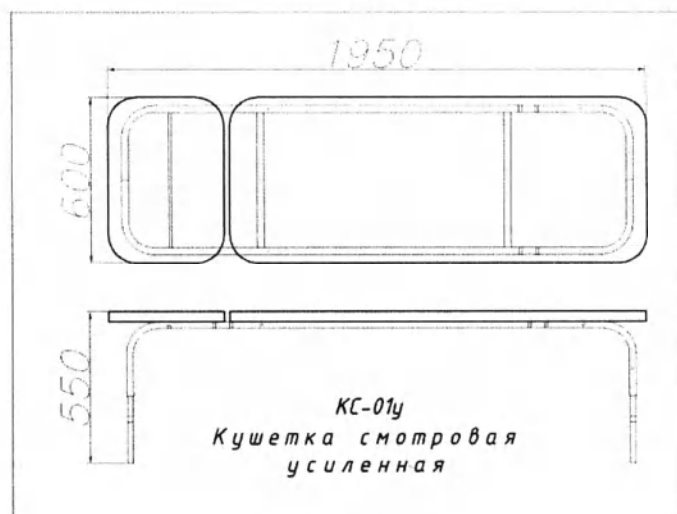


Рисунок 2

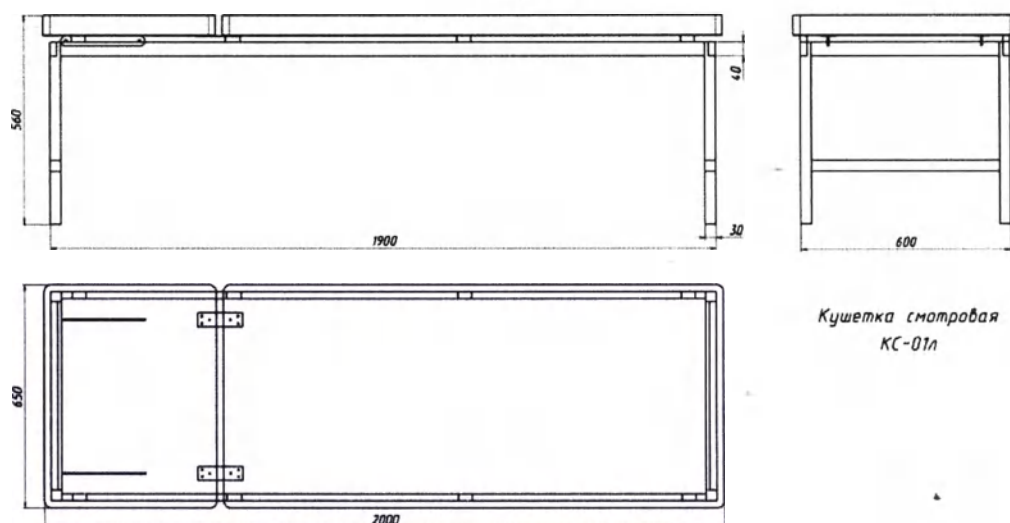


Рисунок 3

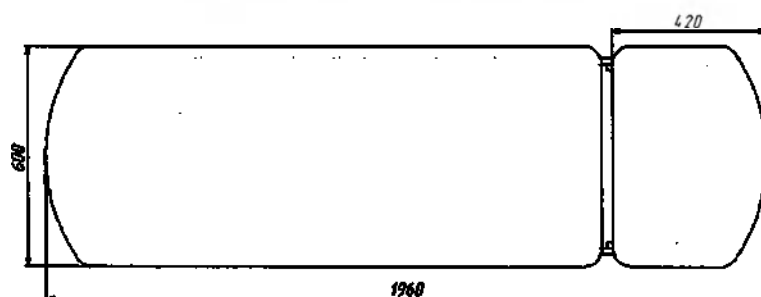


Рисунок 4

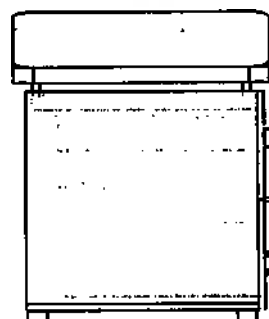
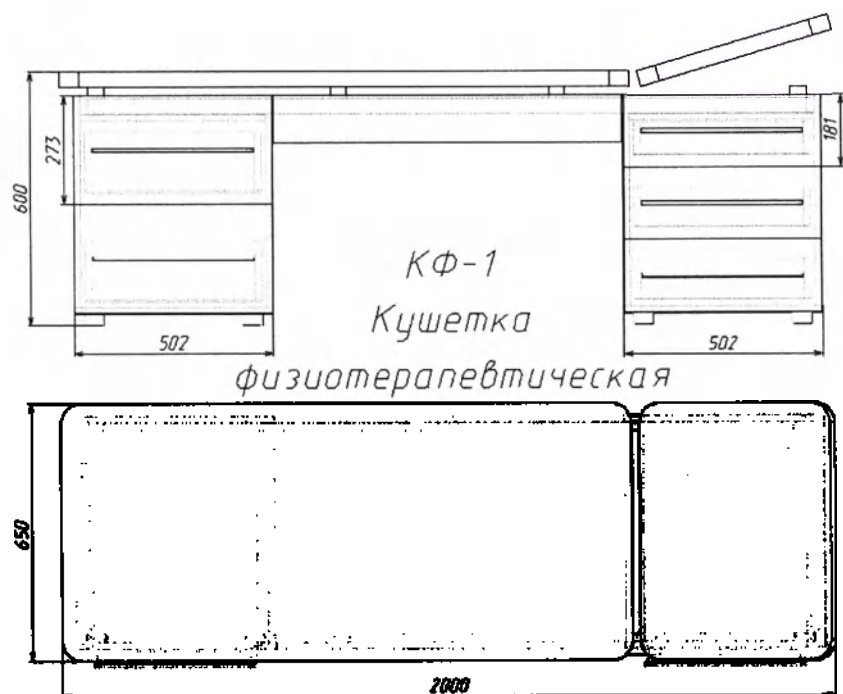


Рисунок 5

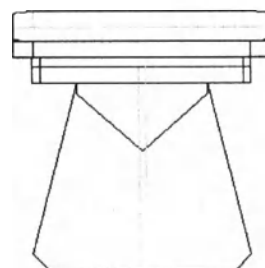
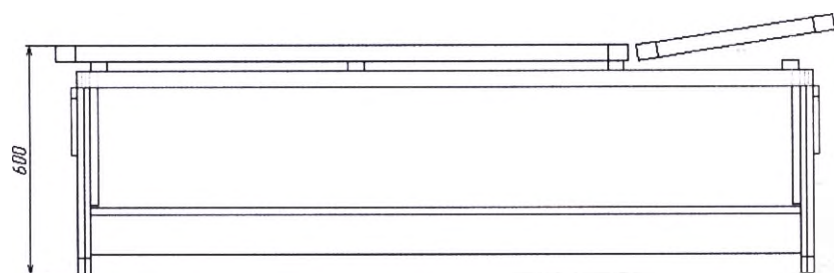


Рисунок 6




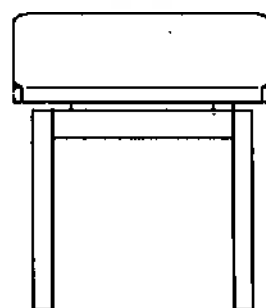


Рисунок 7

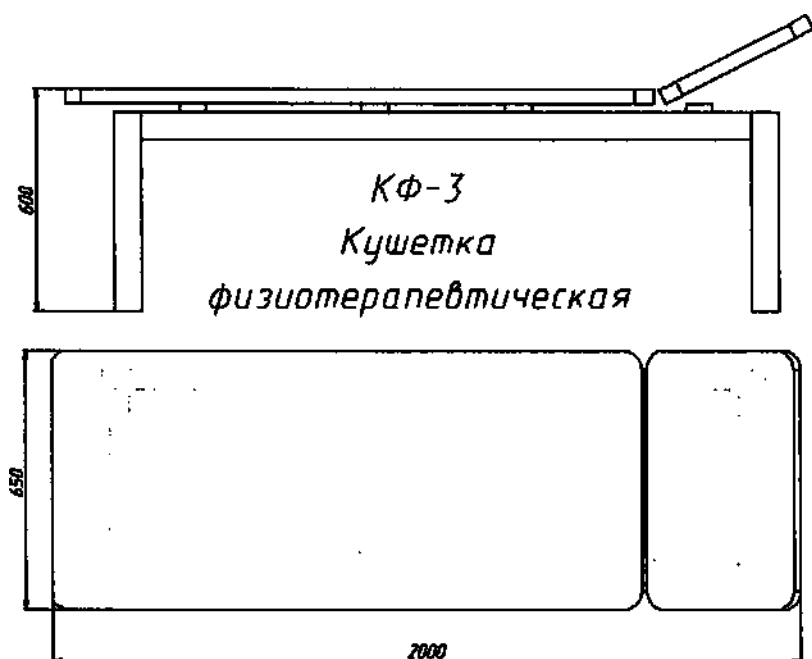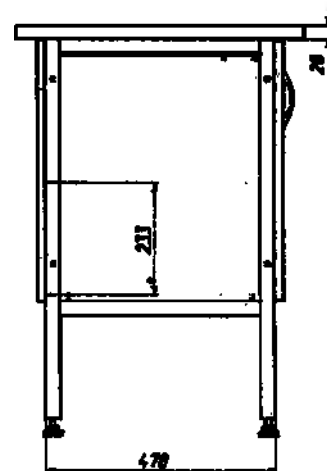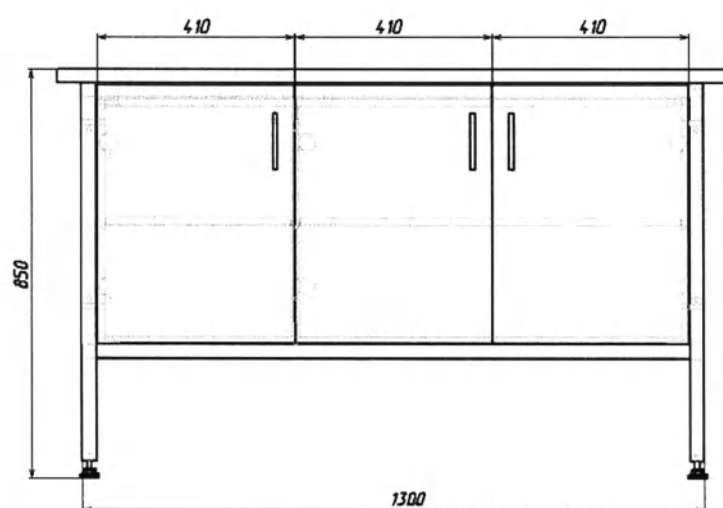

СМК-01г
Тумба лабораторная



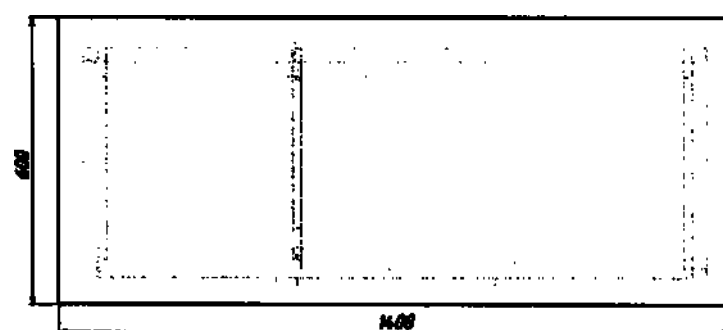


Рисунок 8

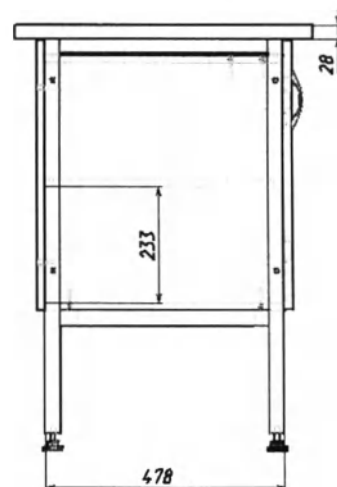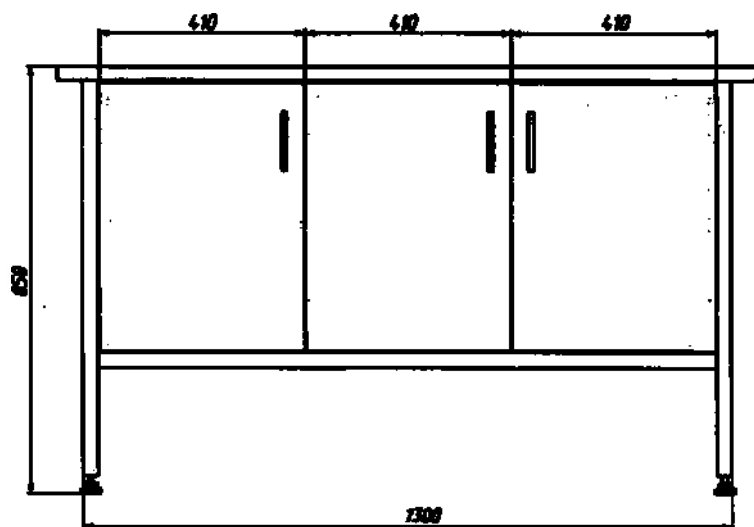

СМК-01ш
Тумба лабораторная



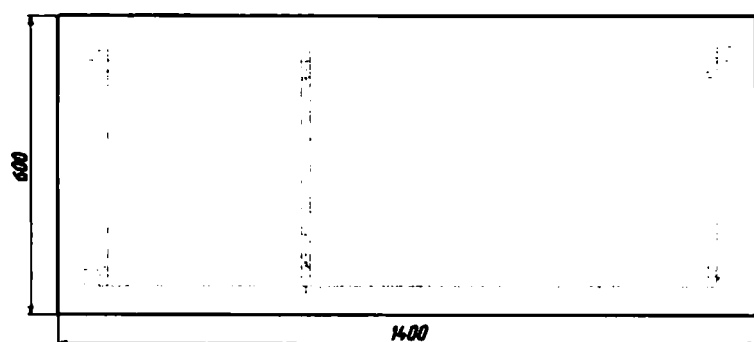


Рисунок 9

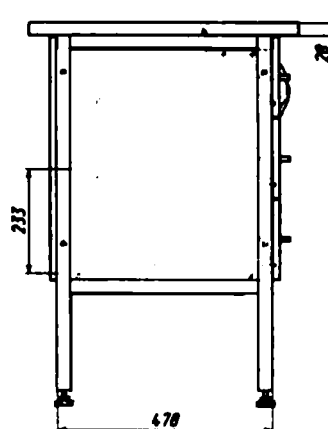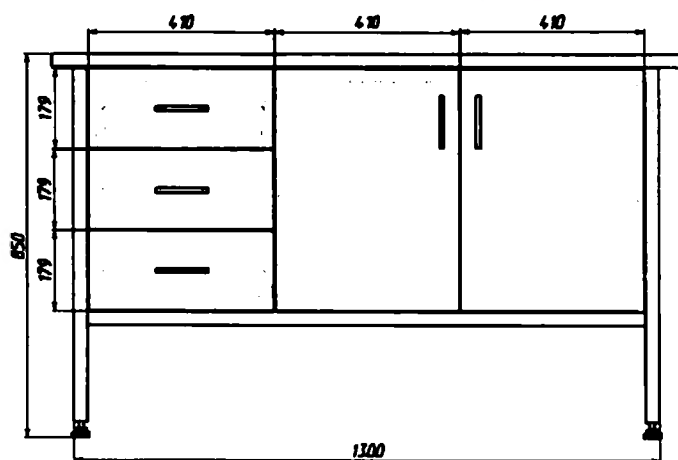

СМК-02г
Тумба лабораторная



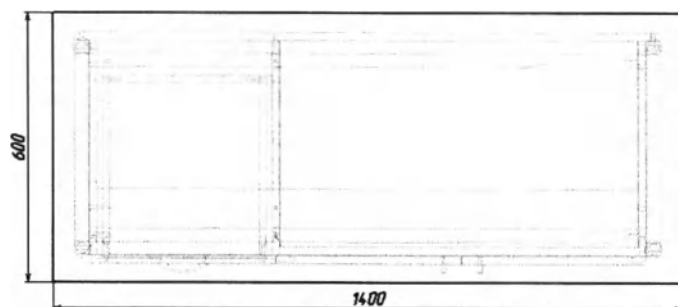


Рисунок 10

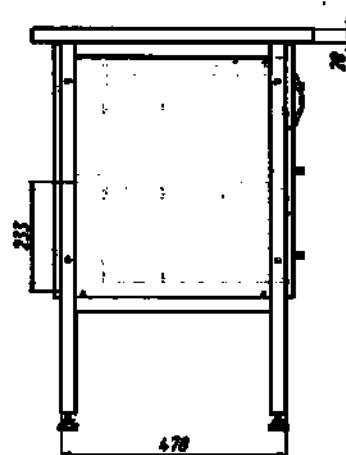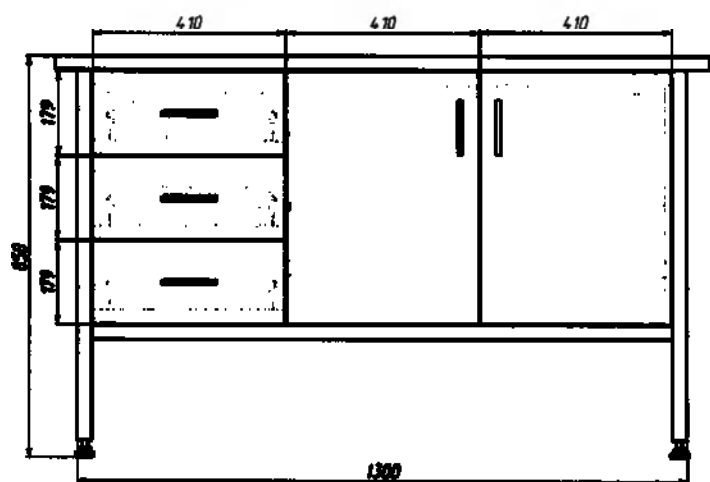

CMK-02w
Тумба лабораторная



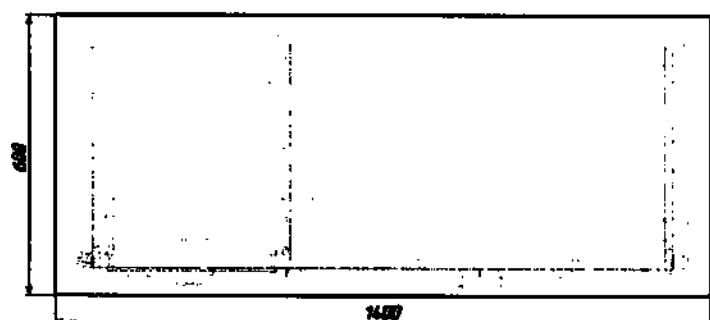


Рисунок 11

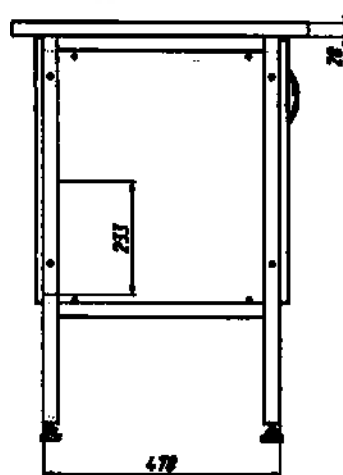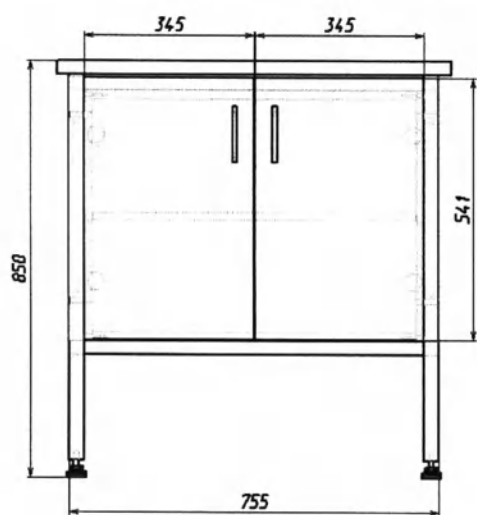

TMK-01z
Тумба лабораторная



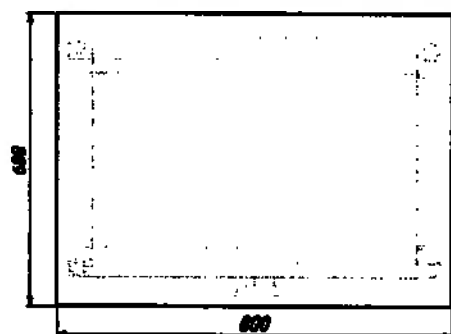


Рисунок 12

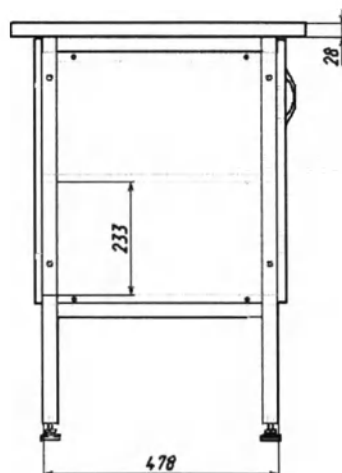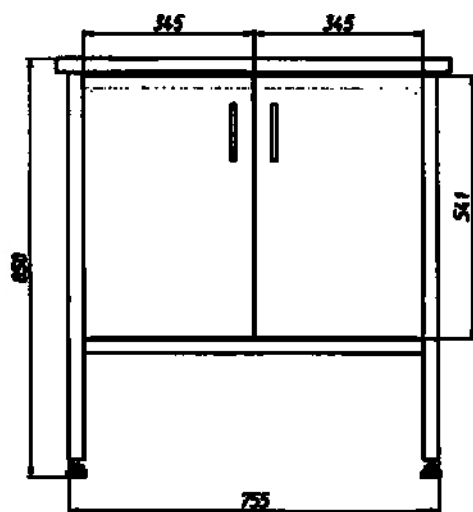

ТМК-01ш
Тумба лабораторная



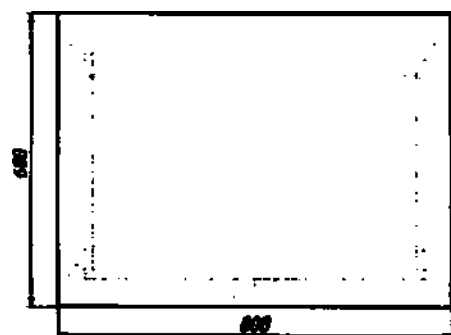


Рисунок 13

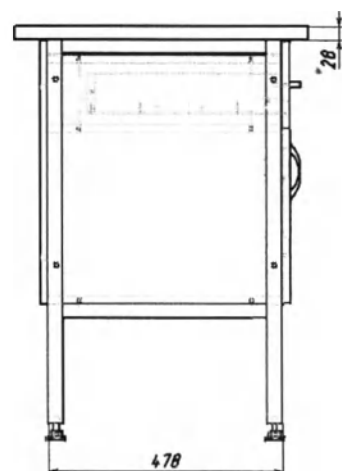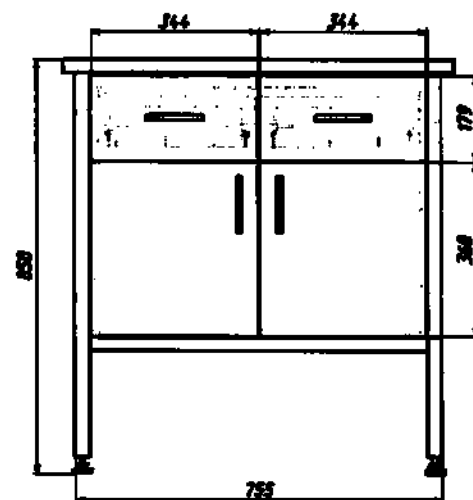

ТМК-02z
Тумба лабораторная







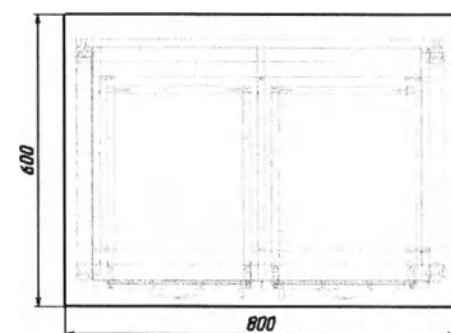


Рисунок 14

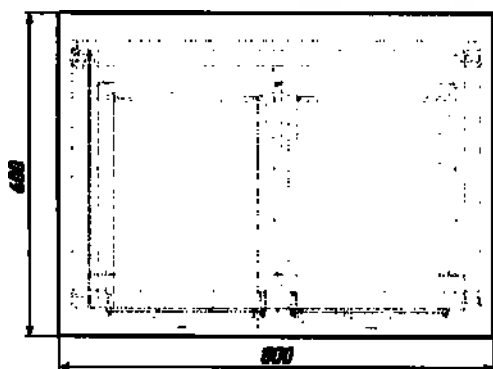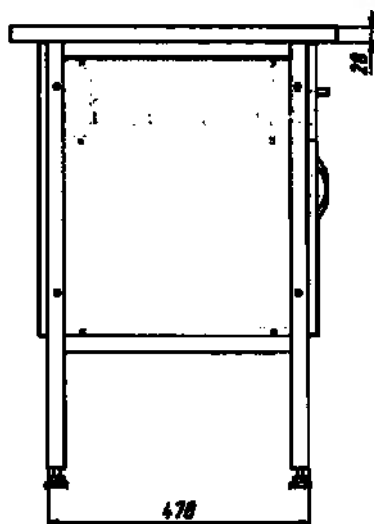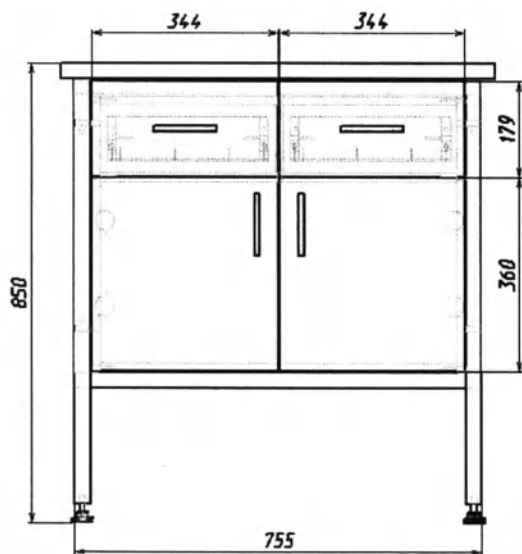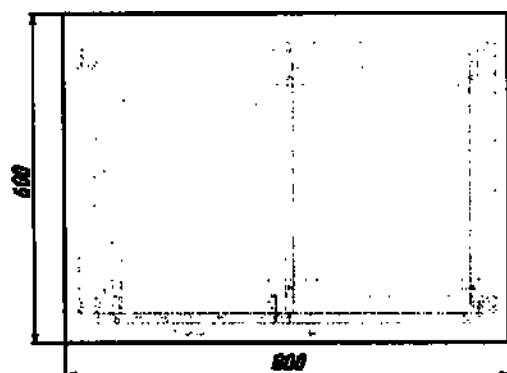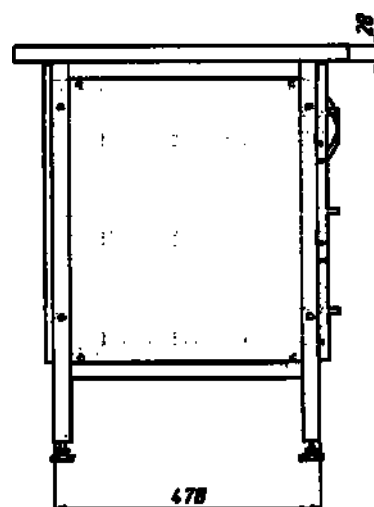

ТМК-02ш
Тумба лабораторная

Рисунок 15

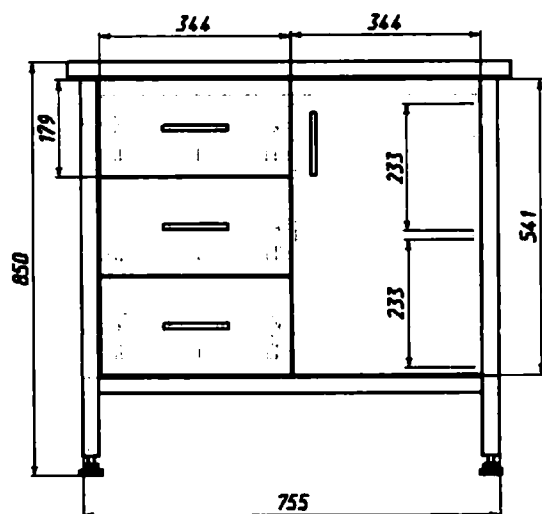

ТМК-032
Тумба лабораторная

Рисунок 16

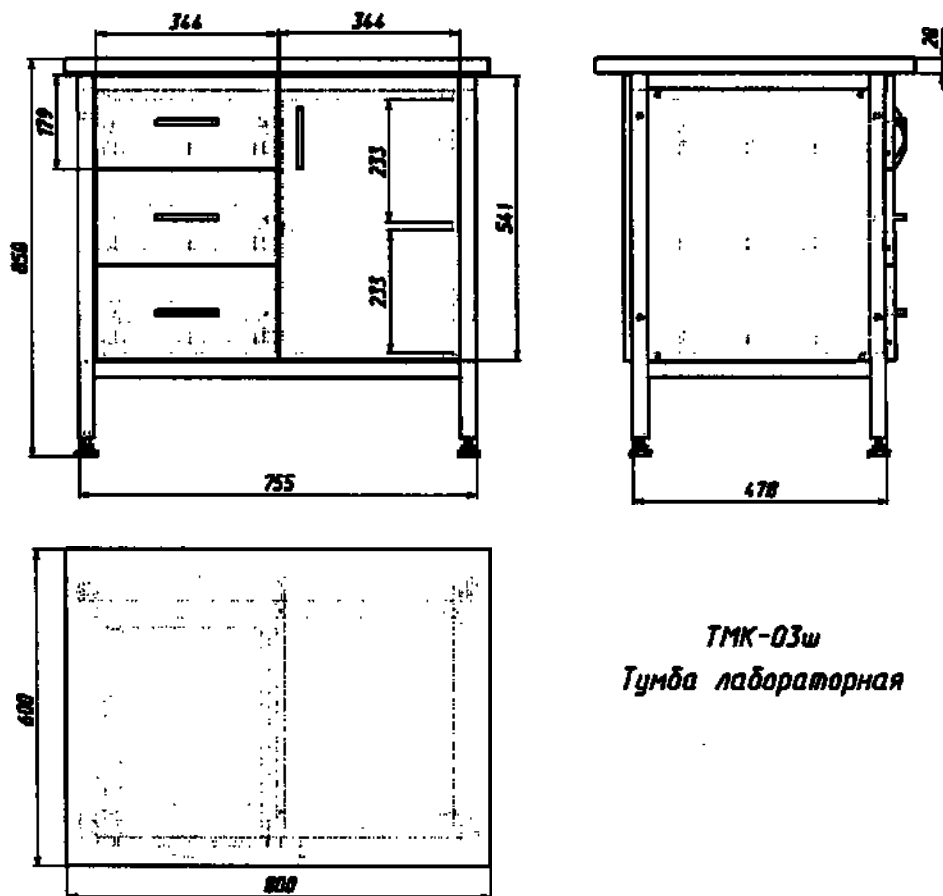


Рисунок 17

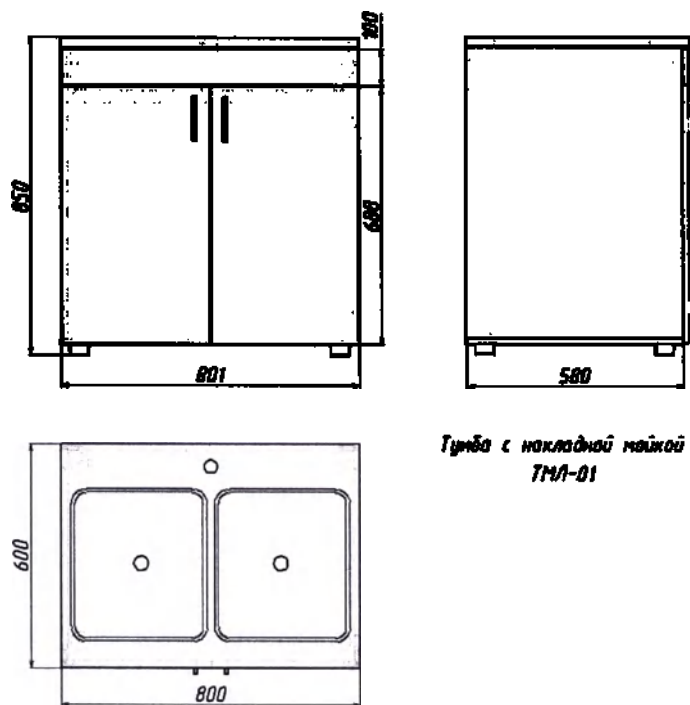


Рисунок 18

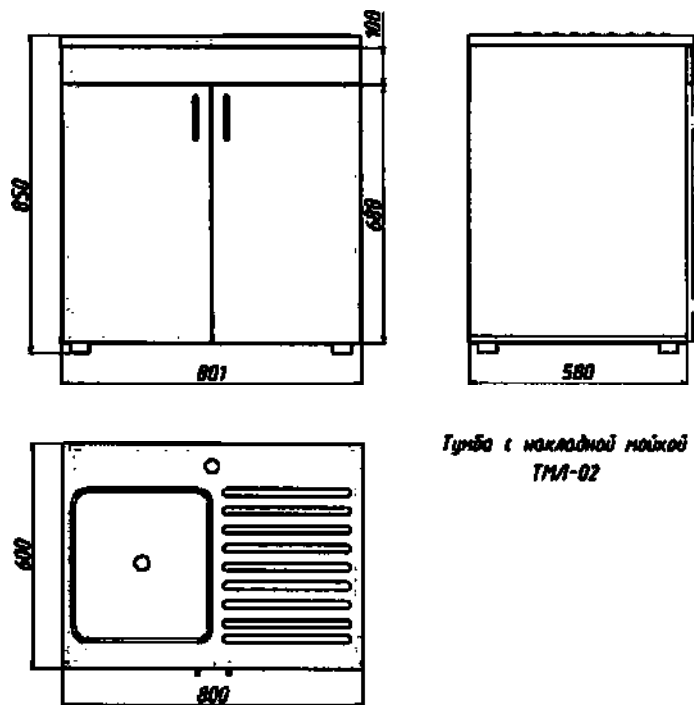


Рисунок 19

ШМ-2



Рисунок 20

ШМ-3



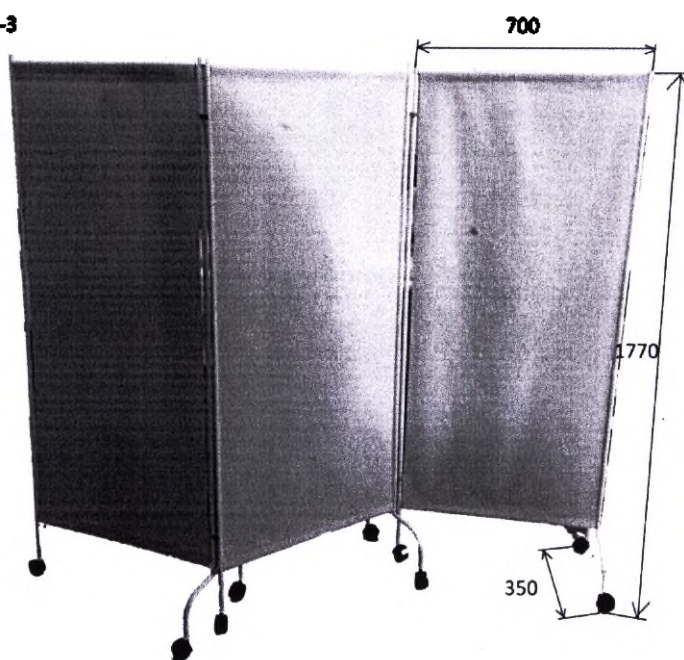


Рисунок 21

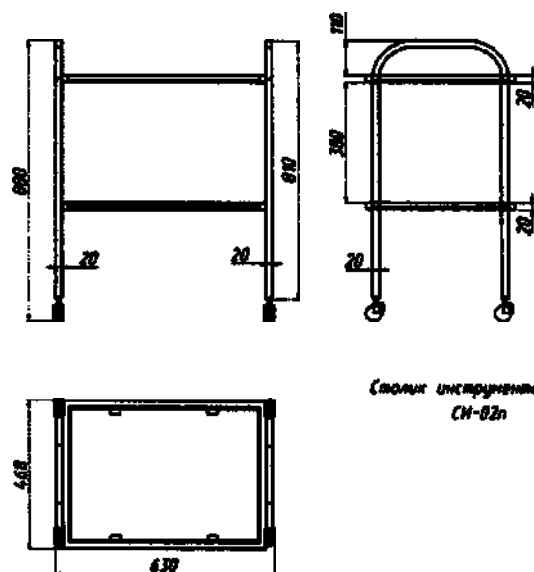


Стол инструментальный
СН-02н

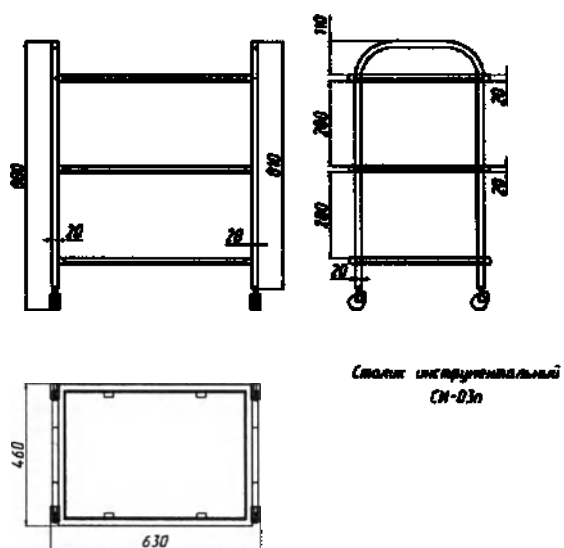

Стол инструментальный
СН-03н


Рисунок 22

Рисунок 23

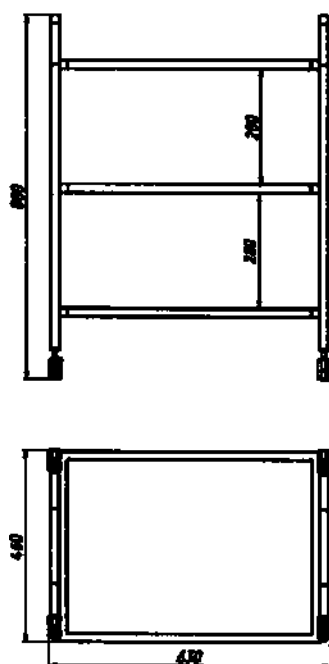

Стол инструментальный
СН-03н


Рисунок 24

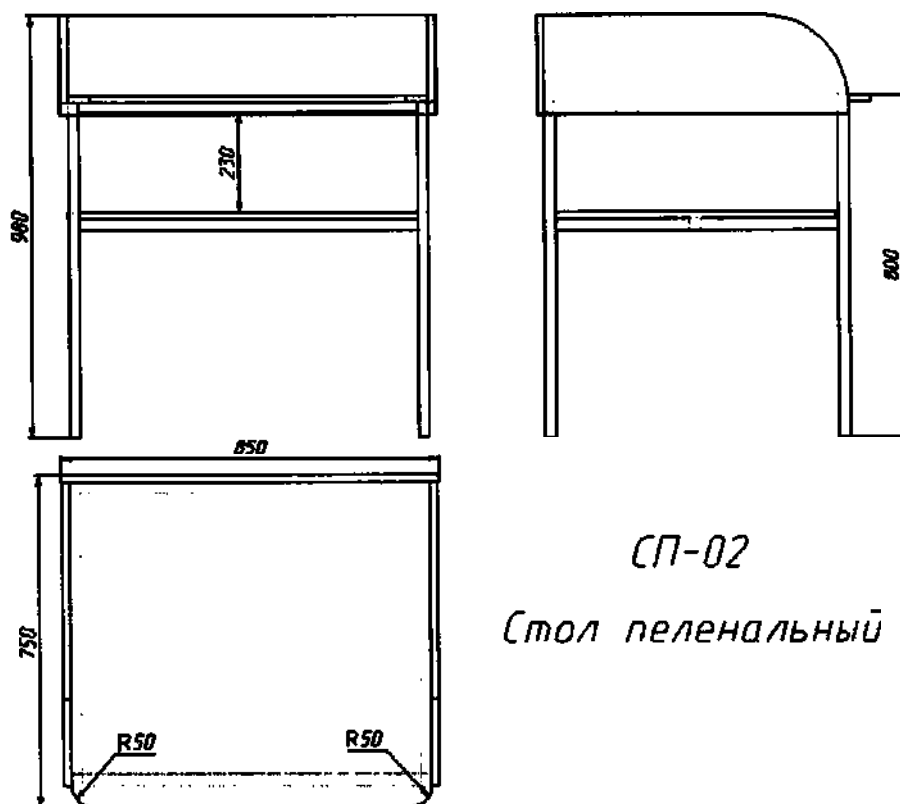

СП-02

Стол пеленальный


Рисунок 26

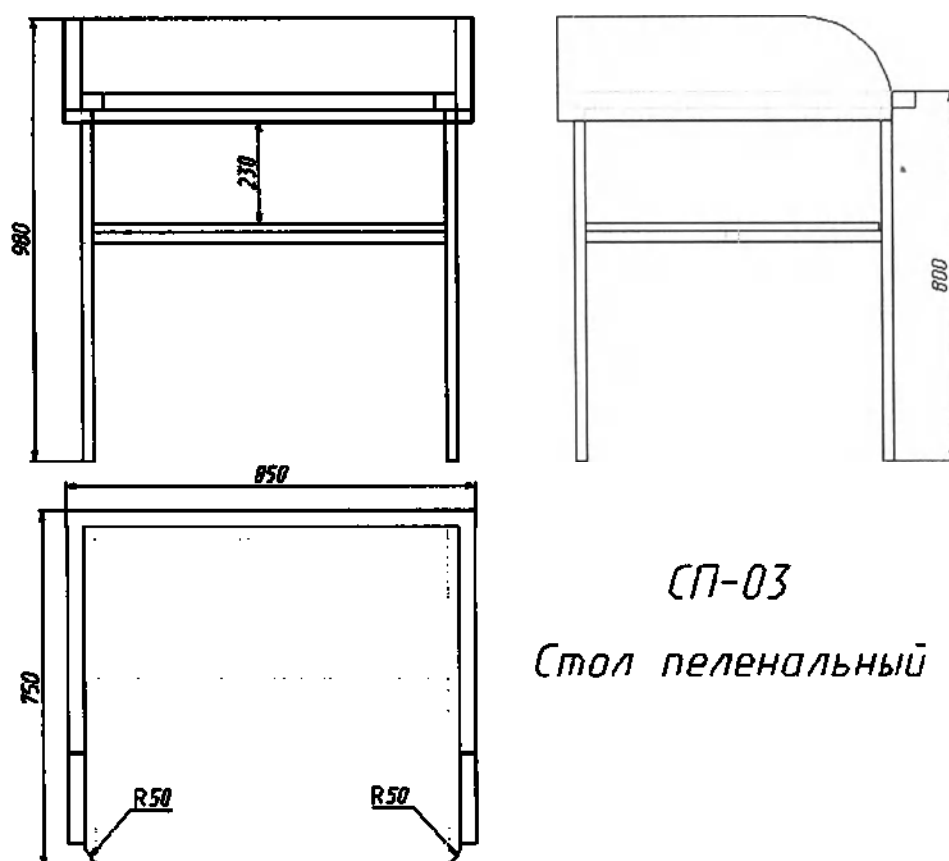

СП-03

Стол пеленальный

Рисунок 27

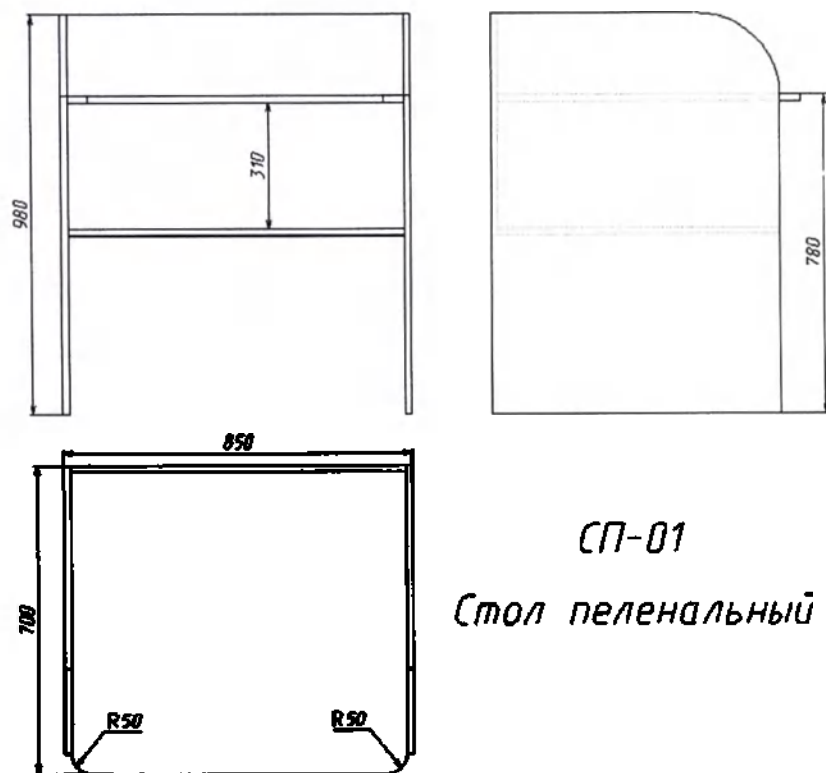

СП-01
Стол пеленальный

Рисунок 28

Контактные данные производителя

Общество с ограниченной ответственностью Мебельная фабрика «ОМЕТА»

620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б

Тел.: +7 (343) 311-22-27



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

23 (двадцать три) листов(-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Директор Поляков А.А.

Подпись _____



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на медицинское изделие
Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018:
оснащения служебных помещений

2018

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на наборы мебели медицинской (далее - наборы мебели), предназначенную для установки во врачебных/смотровых кабинетах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

1. Назначение изделия: Предназначена для оборудования лечебных учреждений.

2. Область распространения: широкого применения.

3. Комплектация:

1. Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-003-72886127-2018: оснащения служебных Помещений:

Вариант комплектации 1:

-

Вариант комплектации 2:

-

Вариант комплектации 3:

-

Вариант комплектации 4:

-

Контактные данные производителя

Общество с ограниченной ответственностью Мебельная фабрика «ОМЕТА»

620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 67 Б

Тел.: +7 (343) 311-22-27

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

2 (два) листов(-а)

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА».
Директор Поляков А.А.

Подпись _____

