

Նոտարական ակտի կոդ
Код нотариального акта

431-20220818-66-6187559



Նոտարական ակտի գաղտնագիր
Пароль нотариального акта

836FOF

«ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի (իրավաբանական հասցեն՝ ք.Երևան, Բաֆֆու փողոց 111, գրանցված՝ 07.06.2016թ. ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում, գրանցման համար՝ 290.110.912407, ՀՎՀՀ՝ 01271352) տնօրեն՝ ՎԱՀԵ ՌՈՒԼԵՍԻ ԹՈՒՆՅԱՆԻՑ, ծնված՝ 19/06/1985թ., ՀԾՀ՝ 2914850123, նույնականացման քարտ՝ 006532162, տրված՝ 006-ի կողմից, 23/05/2017թ., հաշվառված՝ ք.Երևան, Ավան Առինջ 2 միկրոշրջան, 1/5-25 հասցեով

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ք.Երևան Երկու հազար քսաներկու թվականի օգոստոսի տասնութին 18.08.2022թ.

Ես՝ ՎԱՀԵ ՌՈՒԼԵՍԻ ԹՈՒՆՅԱՆԻՑ, հանդիսանալով «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն, սույնով հայտնում եմ, որ կից «Բժշկական ֆունկցիոնալ էլեկտրական մահճակալ Barry պատկանելիքներով» բժշկական արտադրանքի շահագործման ուղեցույցը կազմվել է «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի մասնագետների կողմից, որը 16.08.2022թ.-ին հաստատվել և ստորագրվել է իմ կողմից:

Որի համար ստորագրում եմ:

Перевод с армянского

От директора ООО «АРИДЕС» (юридический адрес: г. Ереван, ул. Раффи 111, зарегистрировано 07.06.2016г. в государственном регистре юридических лиц РА, регистрационный номер: 290.110.912407, ИНН: 01271352) ТУНЯНА ВАГЕ РУЛЕСОВЧА 19.06.1985 года рождения, НПУ: 2914850123, идентификационная карта: 006532162, выдана 23.05.2017г. органом 006, зарегистрированной по адресу: город Ереван, Аван Аринж, 2 м/р 1/5-25

ЗАЯВЛЕНИЕ

г. Ереван Восемнадцатого августа две тысячи двадцать второго года 18.08.2022г.

Я, ТУНЯН ВАГЕ РУЛЕСОВИЧ, являясь директором ООО «АРИДЕС», настоящим заявляю, что приложенное руководство по эксплуатации на медицинское изделие «Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями» составлено специалистами ООО «АРИДЕС», которое заверено и подписано мной 16.08.2022г.

Под чем и подписываюсь.

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

подпись

Երկու հազար քսաներկու թվականի օգոստոսի տասնութին:

Ես՝ ՀՀ «Երևան» նոտարական տարածքի նոտար՝ ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՍ վավերացնում եմ՝ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն ՎԱՀԵ ՌՈՒԼԵՍԻ ԹՈՒՆՅԱՆԻ ստորագրության իսկությունը, որը կատարվել է իմ ներկայությամբ: «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի համաձայն վավերացնում եմ որոշակի անձի կողմից կատարված ստորագրության իսկությունը, այլ ոչ թե փաստաթղթում շարադրված փաստերը: Նրա ինքնությունը և գործունակությունը, ինչպես նաև իրավաբանական անձի իրավունակությունը ստուգված է: Գրանցված է գրանցամատյանում՝ **4816**: Գանձված է պետական տուրք հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար մեկ հազար ՀՀ դրամ, համաձայն «Պետական Տուրքի» և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների:



ՆՈՏԱՐ

ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Восемнадцатого августа две тысячи двадцать второго года.

Я, ГРИГОРЯН АРМЕН СУРЕНОВИЧ, нотариус нотариальной территории Ереван РА, удостоверяю подлинность подписи директора ООО «АРИДЕС» ТУНЯНА ВАГЕ РУЛЕСОВИЧА, который был сделан в моем присутствии. Согласно статье 67 Закона РА «О нотариате», свидетельствую подлинность подписи, сделанной определенным лицом, а не изложенные в нем факты. Его личность и дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены. Зарегистрировано в реестре за **4816**. Взыскана государственная пошлина пятьсот драм РА и оплата за услуги одна тысяча драм РА, согласно законам РА «О государственной пошлине» и «О нотариате».



НОТАРИУС

ГРИГОРЯН АРМЕН СУРЕНОВИЧ



ARIDES LLC (ООО «АРИДЕС»)

ул. Раффи 111, Малатия – Себастья,
0064, Ереван, Республика Армения

«Утверждаю»

Директор

ООО «АРИДЕС»



Тунян В.Р.

08

2022 г.

**Руководство по эксплуатации
на медицинское изделие:**

**«Кровать медицинская функциональная электрическая
Barry с принадлежностями»**

Производства

**ООО «АРИДЕС»
ARIDES Limited liability company
(ARIDES LLC)
Республика Армения**

2022

Содержание

1. Наименование и исполнения медицинского изделия	3
2. Информация о производителе и уполномоченном представителе производителя	3
3. Назначение медицинского изделия	4
4. Потенциальные потребители изделия	4
5. Особые свойства медицинского изделия, показания и противопоказания	4
6. Конструкция, принцип действия медицинского изделия.....	6
6.1 Основная конструкция и принцип действия.....	6
6.2 Варианты исполнения, состав и внешний вид изделия	13
6.3 Описание конструктивных компонентов и элементов состава:.....	24
7. Техническая спецификация.....	65
7.1 Основные технические характеристики.....	65
8. Маркировка медицинского изделия	183
9. Упаковка, транспортировка и маркировка упаковки медицинского изделия.....	191
10. Перечень нормативной документации	201
11. Эксплуатация	202
11.1 Сборка кровати	202
11.2 Эксплуатация кровати.....	207
11.3 Разборка кровати	208
12. Сведения о стерильности, чистке и дезинфекции изделия	209
12.1 Рекомендации по очистке.....	209
12.2 Дезинфекция	209
13. Техническое обслуживание.....	209
14. Гарантийные обязательства.....	215
15. Контактная информация.....	216
16. Утилизация.....	217
Приложение 1. Электромагнитная совместимость	218

ARIDES LLC. (ООО "АРИДЕС")	Руководство по эксплуатации	Версия № 1.00.0	Дата 01.03.2021
----------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Уважаемый Пользователь!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретя Кровать медицинскую функциональную электрическую Barry с принадлежностями.

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте данное Руководство по эксплуатации перед началом работы и строго следуйте всем описанным в нем процедурам.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик кровати и содержит сведения, необходимые для ее правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. Наименование и исполнения медицинского изделия

Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями (Далее - Кровать).

Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями может поставляться в следующих вариантах исполнения:

Barry MBE-2Spp, Barry MBE-2Lpp, Barry MBE-2Sps, Barry MBE-2Lps, Barry MBE-2Scp, Barry MBE-2Lcp, Barry MBE-2Scs, Barry MBE-2Lcs, Barry MBE-2Swp, Barry MBE-2Bwp, Barry MBE-2Lwp, Barry MBE-2Uwp, Barry MBE-2Sws, Barry MBE-2Bws, Barry MBE-2Lws, Barry MBE-2Uws, Barry MBE-2Smpp, Barry MBE-2Bmpp, Barry MBE-2Lmpp, Barry MBE-2Umpp, Barry MBE-2Smpps, Barry MBE-2Bmps, Barry MBE-2Lmps, Barry MBE-2Umps, Barry MBE-2Smwp, Barry MBE-2Bmwp, Barry MBE-2Lmwp, Barry MBE-2Umwp, Barry MBE-2Smws, Barry MBE-2Bmws, Barry MBE-2Lmws, Barry MBE-2Umws, Barry MBE-3Spp, Barry MBE-3Lpp, Barry MBE-3Sps, Barry MBE-3Lps, Barry MBE-3Scp, Barry MBE-3Lcp, Barry MBE-3Scs, Barry MBE-3Lcs, Barry MBE-3Swp, Barry MBE-3Bwp, Barry MBE-3Lwp, Barry MBE-3Uwp, Barry MBE-3Sws, Barry MBE-3Bws, Barry MBE-3Lws, Barry MBE-3Uws, Barry MBE-3Smpp, Barry MBE-3Bmpp, Barry MBE-3Lmpp, Barry MBE-3Umpp, Barry MBE-3Smpps, Barry MBE-3Bmps, Barry MBE-3Lmps, Barry MBE-3Umps, Barry MBE-3Smwp, Barry MBE-3Bmwp, Barry MBE-3Lmwp, Barry MBE-3Umwp, Barry MBE-3Smws, Barry MBE-3Bmws, Barry MBE-3Lmws, Barry MBE-3Umws, Barry MBE-2Kps, Barry MBE-2Kcs, Barry MBE-2Kws, Barry MBE-2Kmps, Barry MBE-2Kmws.

К работе с медицинским изделием допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации, и прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.

2. Информация о производителе и уполномоченном представителе производителя

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»

ООО «АРИДЕС» (ARIDES Limited liability company (ARIDES LLC))

ул. Раффи 111, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения
(111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia)

тел.: +37460 52 99 50

e-mail: info@arides.am

сайт: www.arides.am

Место производства:

Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»

ООО «АРИДЕС» (ARIDES Limited liability company (ARIDES LLC))

ул. Раффи 111, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения
(111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia)

тел.: +37460 52 99 50

e-mail: info@arides.am

сайт: www.arides.am

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ (УПП):

Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»),

125430, г. Москва, улица Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

тел.: +7(495)792-31-90

e-mail: info@sims2.ru

сайт: www.sims2.ru

Разработка, производство и продажа изделия соответствует требованиям: ISO 9001:2015.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н: 1.

Классификация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н: 136210.

3. Назначение медицинского изделия

Предназначено для пользования в качестве кровати пациента для отдыха/сна в больничной палате/комнате, с электроприводом, обеспечивающей пациенту/медицинскому персоналу возможность регулировки с помощью пульта управления.

Область применения: стационары лечебно-профилактических учреждений, отделения реабилитации, травматологии и ортопедии, наркологические и психоневрологические диспансеры, паллиативные отделения, хосписы, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, для ухода за лежащими больными или пожилыми людьми в домашних условиях.

Условия применения: используется в качестве больничной мебели, для расположения пациента.

Способ применения: в соответствии с руководством по эксплуатации.

4. Потенциальные потребители изделия

Квалифицированный медицинский персонал, пациенты различных медицинских учреждений, дома престарелых и сопоставимые учреждения, физически слабые люди, нуждающиеся в уходе в домашних условиях.

5. Особые свойства медицинского изделия, показания и противопоказания

5.1 Особые свойства медицинского изделия

Медицинское изделие управляется с помощью пульта управления, что позволяет менять положение пациента и добиваться наиболее выгодной позиции для отдыха, сна и лечения.

5.1.1 Стерильность

Медицинское изделие поставляется нестерильным.

5.1.2 Наличие лекарственных веществ

В данном медицинском изделии в качестве компонента не применяются вещества, которые при отдельном использовании могут быть оценены как лекарственные вещества или субстанции в соответствии с определением Статьи I Директивы 65/65/ЕЭС.

5.1.3 Содержание производных человеческой крови

Данное медицинское изделие не содержит крови или компонентов крови человека.

5.1.4 Содержание компонентов из тканей животного происхождения

Данное медицинское изделие не содержит компоненты, полученные из тканей животного происхождения.

5.1.5 Содержание фталатов

Данное медицинское изделие не содержит фталатов.

5.1.6 Содержание мутагенных и канцерогенных компонентов

Данное медицинское изделие не содержит мутагенных и канцерогенных компонентов.

5.1.7 Отношение к изделиям категории AP или APG

Данное медицинское изделие не является изделием категории AP или APG.

5.1.8 Программное обеспечение

Данное медицинское изделие не содержит программного обеспечения.

5.1.9 Показания

Размещение пациентов и создание необходимых условий для пациента и медицинского персонала при проведении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, а также при уходе за пациентом как в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, так и в домашних условиях.

5.1.10 Противопоказания

- Кровать не подходит для пациентов, которым требуется специальный лечебно-терапевтический уход (например, тяжелое ожоговое поражение) или рентгенодиагностика.
- Кровать не предназначена для использования у пациентов, размер тела и вес которых ниже следующих показателей: Рост: 146 см, Вес: 40 кг, Индекс массы тела «ИМТ»: 17 или для маленьких детей, младше 12 лет.
- В случае длительного нахождения в положении лёжа, необходимы специальные профилактические меры для минимизации риска пролежней у таких пациентов.

5.1.11 Возможные побочные действия

При надлежащем уходе и техническом обслуживании в соответствии с руководством по эксплуатации, данное медицинское изделие не оказывает побочных действий.

5.1.12 Меры предосторожности:

- К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство, конструкцию кровати и правила ее эксплуатации.
- При перемещении кровати необходимо разблокировать тормоза на всех самоориентирующихся колесах с тормозом.
- Тормоза колес стоящей кровати или прикроватного столика должны быть заблокированы. Разблокировка колес производится только при необходимости перемещения кровати/прикроватного столика.
- Колеса на кровати предназначены для её передвижения на короткие расстояния по твердому ровному полу внутри помещения, в котором установлена кровать. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение по её грунту и другой несоответствующей поверхности.
- Не допускается перемещение кровати при заблокированных колёсах.
- Во избежание повреждений, избегайте ударов и столкновений кровати с твердыми предметами при её перемещении.
- Необходимо всегда поднимать боковое ограждение при оставлении больного без присмотра, во избежание его случайных падений.

- Не допускается перемещение кровати держась за боковые ограждения.
- В случае длительного нахождения пациента в положении лежа, необходимы специальные профилактические меры для минимизации риска пролежней.
- Кровать не подходит для пациентов, которым требуется специальный лечебно-терапевтический уход (например, при тяжелом ожоговом поражении).
- Перед использованием проверяйте исправность всех подвижных частей кровати, надежность затяжки крепежных элементов и отсутствие ослабленных соединений, убедитесь в отсутствии в помещении помех (мебель, стены, подоконники и т.п.), препятствующих нормальному функционированию кровати.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кровать, указанную на этикетке с маркировкой. Запрещено вставать и сидеть на отдельно поднятых секциях, опираться на торцевые ограждения или иным образом перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.
- Использование кровати в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекачивание кровати через препятствия порошкового типа, выбоины в полу и иные большие неровности расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.
- Запрещается размещение не предусмотренных конструкцией предметов или оборудования на раме кровати или ее использование в качестве опоры для человека.
- В случае, когда необходимо оставить пациента без присмотра, поднимите боковые ограждения и приведите положение кровати в нулевую позицию: все секции лежа расположены горизонтально, ложе кровати опущено в крайнее нижнее положение (при наличии функции регулировки высоты лежа).
- Избегайте чрезмерного натяжения, спутывания, перекручивания или повреждения (в том числе движущимися частями кровати) электрических проводов и провода пульта управления.
- Во избежание повреждения, избегайте падения пульта управления на твердую поверхность или в воду.
- При повреждении пульта управления не пытайтесь заменить детали или починить его самостоятельно. Обратитесь к поставщику или официальному представителю производителя для замены.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с кроватью, подключенной к электропитанию.
- Кровать функциональная электрическая не предназначена для проведения рентгенодиагностики.
- В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте.
- Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, или при возникновении посторонних шумов в процессе работы незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
- Если изделие перестало функционировать и/или персонал не может осуществлять контроль при помощи пульта управления, незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

6. Конструкция, принцип действия медицинского изделия



6.1 Основная конструкция и принцип действия


Для обозначения варианта исполнения (модификации) Кровати медицинской функциональной электрической Ваггу с принадлежностями используются следующие буквенно-цифровые значения Ваггу MBE-xXxx или Ваггу MBE-xXxxx, где:

№п/п (позиция в наименовании)	Буква, цифра	Обозначение
-------------------------------	--------------	-------------

варианта исполнения (слева направо)		
1	Barry MBE	Barry M-medical (медицинская), B-bed(кровать), E-electric (электрическая) – наименование
2	[x]	2- количество электроприводов - регулировка спинной и бедренно-ножной и ножной секций 3- количество электроприводов - регулировка спинной и бедренно-ножной и ножной секции, высоты положения основания матрачного кровати
3	[X]	Тип основания S - стандартное B - широкое L - удлиненное U - универсальное K - кардио
4	[x] [xx] [xx]	Тип изголовья и изножья р – пластик (тип 1), с – пластик (тип 2), w – мдф mp – металл/пластик (тип 3), mw – металл/лдсп
5	x	р-панельное основание s- ламельное основание

Конструкция медицинского изделия для представлена на схемах ниже:

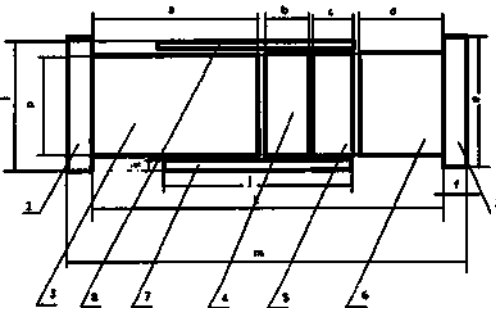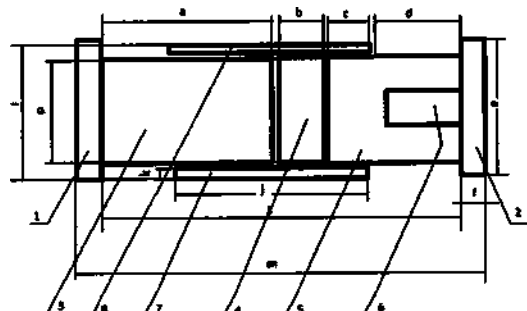Для всех вариантов исполнения (исключая Barry MBE-xUxx, Barry MBE-xUxxx, Barry MBE-xLxx, Barry MBE-xLxxx, Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) 	Для вариантов исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx 
1-Изголовье 2-Изножье 3-Спинная секция 4-Тазобедренная секция 5-Промежуточная секция 6-Ножная секция 7,8-Боковые ограждения	1-Изголовье 2-Изножье 3- Спинная секция 4- Тазобедренная секция 5,6-Ножная секция 7,8-Боковые поручни
Для вариантов исполнения Barry MBE-xUxx, Barry MBE-xUxxx, Barry MBE-xLxx, Barry MBE-xLxxx	

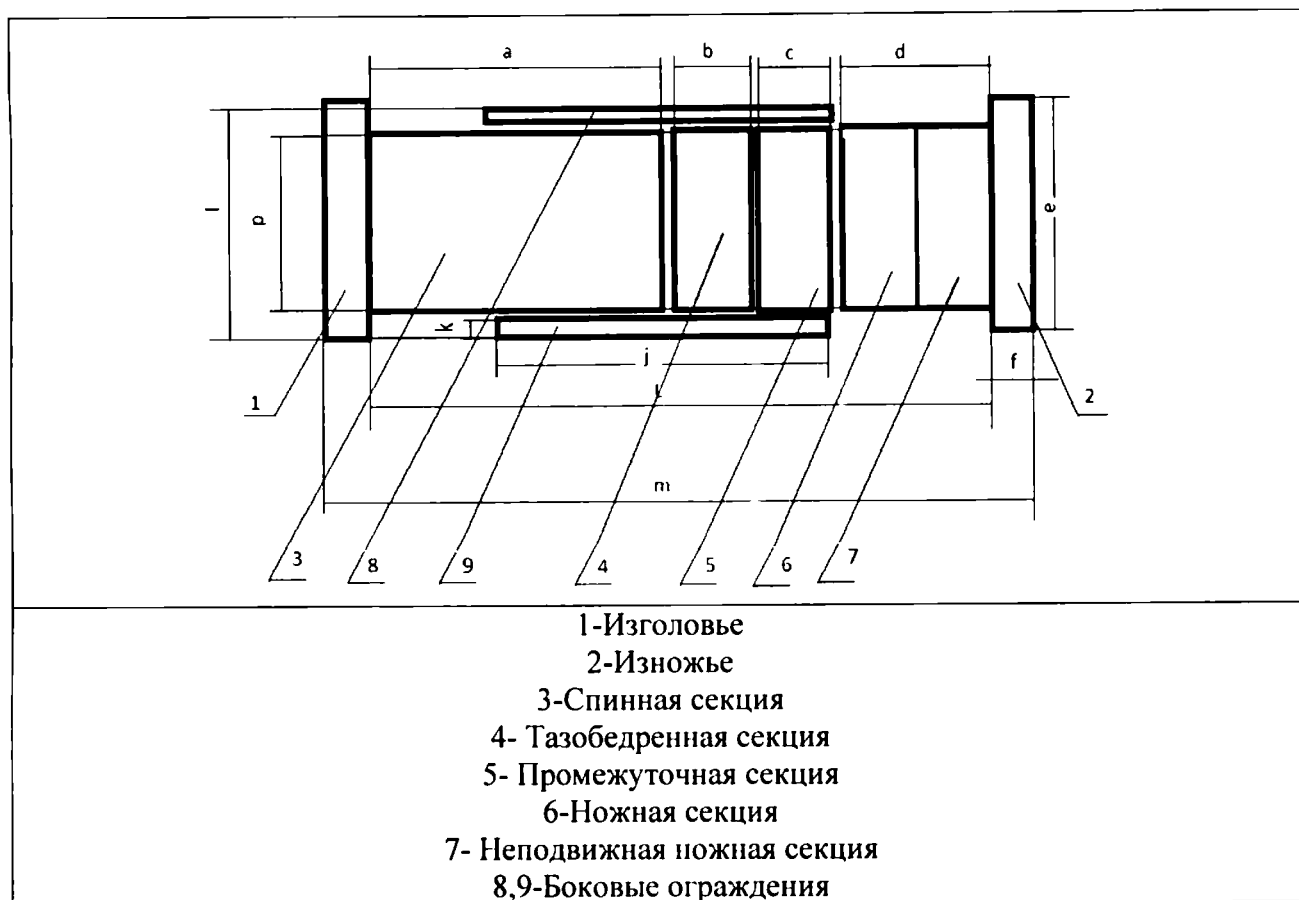

Варианты исполнения Barry MBE-xSxx, Barry MBE-xSxxx, Barry MBE-xVxx, Barry MBE-xVxxx состоят из: рамы кровати металлической в сборе с панельным (р) или ламельным (s) стандартным (тип S) или широким (тип V) основанием под матрац. Основания состоят из следующих секций: спинная (3), тазобедренная (4) и промежуточная (5), ножная (6).

Варианты исполнения Barry MBE-xUxx, Barry MBE-xUxxx, Barry MBE-xLxx, Barry MBE-xLxxx состоят из: рамы кровати металлической в сборе с панельным (р) или ламельным (s) длинным (тип L) или универсальным (тип U) основанием под матрац. Основания состоят из следующих секций: спинная (3), тазобедренная (4) и промежуточная (5), ножная (6), неподвижная ножная секция (7).

У исполнений (исключая Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx): Barry MBE-2Xxx или Barry MBE-2Xxxx - 3 подвижных секции (спинная, промежуточная, ножная), у исполнений: Barry MBE-3Xxx или Barry MBE-3Xxxx - 3 подвижных секции (спинная, промежуточная, ножная) и регулировка высоты матрацного основания.

Варианты исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx состоят из: рамы кровати металлической в сборе с ламельным (s) основанием типа К под матрац. Основание состоит из следующих секций: спинная (3), тазобедренная (4) и ножная (5, 6). У исполнений Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx - 2 подвижных секции (спинная, ножная).

Все варианты исполнения (исключая Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) могут быть оснащены по желанию заказчика двумя 5-ти или 4-мя секционными боковыми ограждениями (8, 9), изголовьем (1) и изножьем (2) различных конфигураций в исполнениях (См. таблицу ниже).

Варианты исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx оснащены двумя 4-х секционными боковыми ограждениями (7,8), изголовьем (1) и изножьем (2) в исполнениях (См. таблицу ниже).

Вариант исполнения (тип основания)	Возможный вариант исполнения (тип) изголовья и изножья кроватей	Наименования вариантов исполнения
Barry MBE-xS[x]x	p – пластик (тип 1), с – пластик (тип 2), w – мдф	Barry MBE-2Spp, Barry MBE-2Sps, Barry MBE-2Scp, Barry MBE-2Scs, Barry MBE-2Swp, Barry MBE-2Sws, Barry MBE-3Spp, Barry MBE-3Sps, Barry MBE-3Scp, Barry MBE-3Scs, Barry MBE-3Swp, Barry MBE-3Sws
Barry MBE- xS[xx]x	mp – металл/ пластик (тип 3), mw – металл/лдсп	Barry MBE-2Smpp, Barry MBE-2Smpps, Barry MBE-2Smwp, Barry MBE-2Smws, Barry MBE-3Smpp, Barry MBE-3Smpps, Barry MBE-3Smwp, Barry MBE-3Smws
Barry MBE-xL[x]x	p – пластик (тип 1), с – пластик (тип 2), w – мдф	Barry MBE-2Lpp, Barry MBE-2Lps, Barry MBE-2Lcp, Barry MBE-2Lcs, Barry MBE-2Lwp, Barry MBE-2Lws, Barry MBE-3Lpp, Barry MBE-3Lps, Barry MBE-3Lcp, Barry MBE-3Lcs, Barry MBE-3Lwp, Barry MBE-3Lws
Barry MBE-xLxxx	mp – металл/ пластик (тип 3), mw – металл/лдсп	Barry MBE-2Lmpp, Barry MBE-2Lmps, Barry MBE-2Lmwp, Barry MBE-2Lmws, Barry MBE-3Lmpp, Barry MBE-3Lmps, Barry MBE-3Lmwp, Barry MBE-3Lmws
Barry MBE-xBxx	w – мдф	Barry MBE-2Bwp, Barry MBE-2Bws, Barry MBE-3Bwp, Barry MBE-3Bws
Barry MBE-xBxxx	mp – металл/ пластик (тип 3), mw – металл/лдсп	Barry MBE-2Bmpp, Barry MBE-2Bmps, Barry MBE-2Bmwp, Barry MBE-2Bmws, Barry MBE-3Bmpp, Barry MBE-3Bmps, Barry MBE-3Bmwp, Barry MBE-3Bmws
Barry MBE-xUxx	w – мдф	Barry MBE-2Uwp, Barry MBE-2Uws, Barry MBE-3Uwp, Barry MBE-3Uws

Barry MBE-xUxxx	mp – металл/ пластик (тип 3), mw – металл/лдсп	Barry MBE-2Umpp, Barry MBE-2Umps, Barry MBE-2Umwp, Barry MBE-2Umws, Barry MBE-3Umpp, Barry MBE-3Umps, Barry MBE-3Umwp, Barry MBE-3Umws
Barry MBE-2Kxx	p – пластик (тип 1), с – пластик (тип 2), w – мдф	Barry MBE-2Kps, Barry MBE-2Kcs, Barry MBE-2Kws,
Barry MBE-2Kxxx	mp – металл/ пластик (тип 3), mw – металл/лдсп	Barry MBE-2Kmpps, Barry MBE-2Kmwps

Все варианты исполнения оснащены 4-мя самоориентирующимися колесами с тормозом, пультом управления, блоком управления с кабелем питания, электроприводом для регулировки угла наклона спинной секции.

Варианты исполнения Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx (исключая Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) также оснащены электроприводом для регулировки угла наклона спинной, промежуточной и ножной секции.

Все варианты исполнения Barry MBE-3Xxx или Barry MBE-3Xxxx оснащены дополнительно электроприводом для регулировки высоты положения основания матрасного кровати.

Варианты исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx оснащены электроприводом для регулировки угла наклона спинной секции, электроприводом для регулировки угла наклона ножной секции.

Каждый вариант исполнения имеет 2 колесные металлические рамы и крючки-держатели, в количестве не более 4 штук, располагающиеся на основной раме.

Все варианты исполнения Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx (исключая Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) могут иметь в комплекте матрас, матрас секционный, устройство для подтягивания, стойку для внутривенных вливаний (код вида 131950), столик прикроватный (код вида 134230).

Все варианты исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx могут иметь в комплекте матрас секционный (кардио), устройство для подтягивания, стойку для внутривенных вливаний (код вида 131950), столик прикроватный (код вида 134230).

Опционально кровати вариантов исполнения Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx (исключая Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) могут комплектоваться чехлом водонепроницаемым для матраса, чехлом водонепроницаемым секционным для матраса секционного, держателем документов (на один карман), держателем документов (на два кармана), растоматом (исключая модификации Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx), держателем принадлежностей, столиком сервисным (все варианты исполнений). Опционально кровати вариантов исполнения Barry MBE-2Uxx, Barry MBE-2Uxxx, Barry MBE-3Lxx, Barry MBE-3Lxxx могут комплектоваться по желанию заказчика подушкой секционной и чехлом для подушки секционной.

Все варианты исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx опционально могут комплектоваться чехлом водонепроницаемым для матраса секционного (кардио), держателем документов (на один карман), держателем документов (на два кармана), держателем принадлежностей, столиком сервисным (все варианты исполнений).

В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания пациента. На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний.

При отсутствии электропитания от электросети кровать автоматически переходит на регулировку от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа.


Принцип действия медицинского изделия основан на том, при помощи нажатия на клавиши пульта управления происходит изменение положения основания кровати или отдельных его секций при помощи электроприводов для получения необходимой пространственной конфигурации. Блок управления с кабелем питания соединяет электроприводы и пульт управления. Блок управления включает комплектный трансформаторный или выпрямляющий/импульсный источник электропитания, в котором ток преобразуется в безопасное сверхнизкое напряжение < 40 вольт постоянного тока. Все электродвигатели и пульт дистанционного управления, соединенные посредством водонепроницаемых штекерных соединений, работают на безопасном сверхнизком напряжении. Используя пульт управления, пациент/медицинский персонал может управлять основными функциями кровати. Отдельные кнопки определены соответствующими символами. Электроприводы работают период времени, в течение которого соответствующие кнопки пульта управления продолжают быть активированными. Пульт управления может размещаться на кровати посредством гибкого крючка. Спиральный кабель обеспечивает достаточную гибкость и свободу движений.

В состав медицинского изделия может входить два или три электропривода. При использовании двух электроприводов, пульт управления позволяет изменять положение спинной и промежуточной и ножной секции для вариантов исполнения MBE-2Xxx, MBE-2Xxxx, спинной и ножной секции для вариантов исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx.


При использовании трех электроприводов для вариантов исполнения Barry MBE-3Xxx или Barry MBE-3Xxxx, пульт управления позволяет изменять положение спинной, промежуточной и ножной секции и высоты положения основания матрасного кровати.

Общие схемы управления режимами работы медицинских кроватей:


1. Для вариантов исполнения Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx:

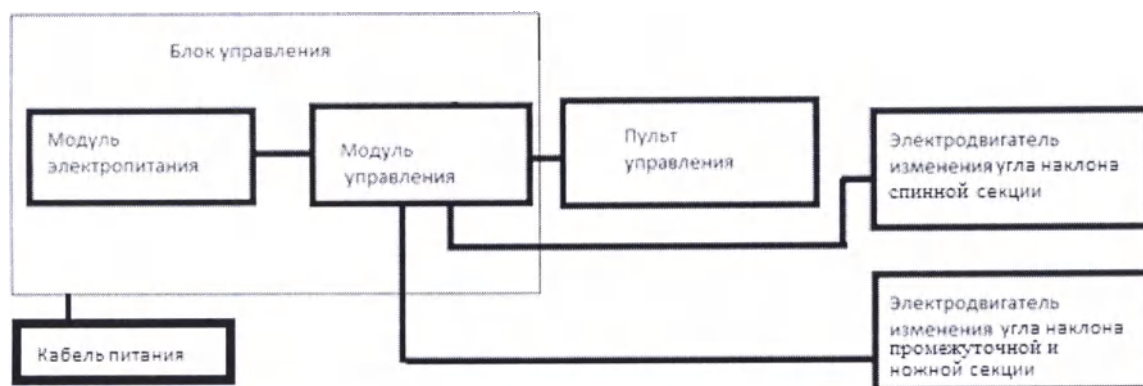

2. Для вариантов исполнения Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx:

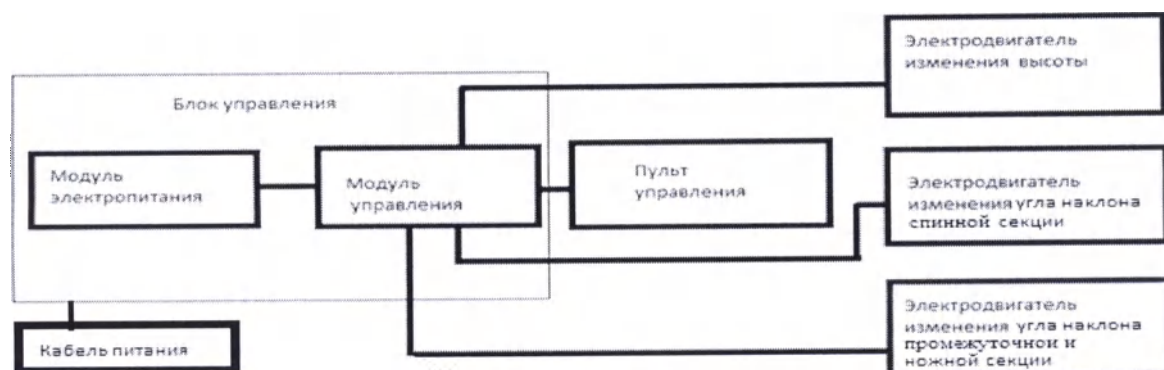

3. Для вариантов исполнения Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx

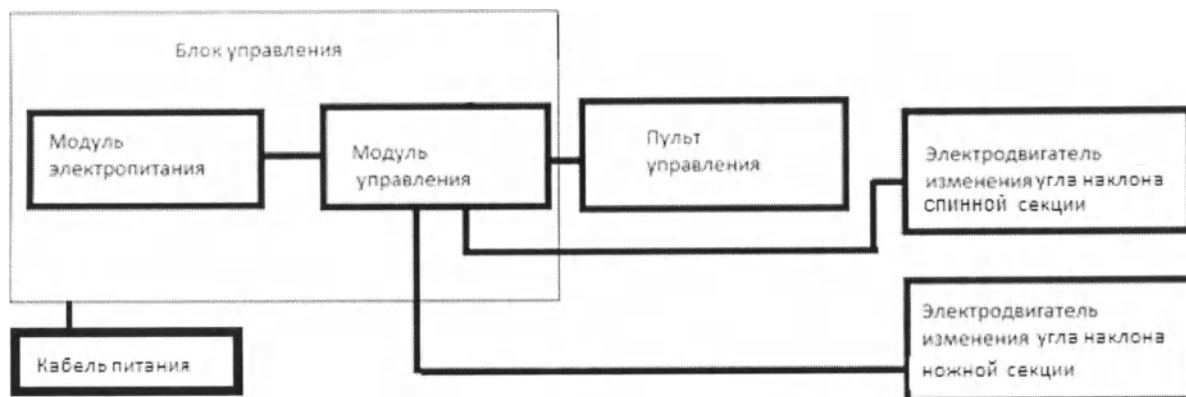

Кровать медицинская функциональная электрическая Barry для всех вариантов исполнения:
Класс защиты от поражения электрическим током по электробезопасности I степень защиты
B, степень защиты оболочки электрооборудования IPX4.

6.2 Варианты исполнения, состав и внешний вид изделия

Комплектация медицинского изделия:		
«Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями», вариант исполнения Barry MBE-2Xxx или Barry MBE-2Xxxx	«Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями», вариант исполнения Barry MBE-3Xxx или Barry MBE-3Xxxx	«Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями», вариант исполнения Barry MBE-2Kxx или Barry MBE-2Kxxx
• Рама кровати в сборе с панельным(р)/ламельным(s) основанием типов S/L/B/U – 1 шт. • Изголовье типов p/c/w/mp/mw – 1 шт. • Изножье типов p/c/w/mp/mw – 1 шт. • Колесная рама металлическая – 2 шт. • Колесо самоориентирующееся с тормозом – не более 8 шт. • Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции – 1 шт. • Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции – 1 шт. • Блок управления – 1 шт. • Пульт управления кровати – 1 шт. • Комплект крепежных изделий в составе:	• Рама кровати в сборе с панельным(р)/ламельным(s) основанием типов S/L/B/U – 1 шт. • Изголовье типов p/c/w/mp/mw – 1 шт. • Изножье типов p/c/w/mp/mw – 1 шт. • Колесная рама металлическая – 2 шт. • Колесо самоориентирующееся с тормозом – не более 8 шт. • Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции – 1 шт. • Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции – 1 шт. • Электропривод для регулировки высоты положения основания матрасного кровати – 1 шт. • Блок управления – 1 шт.	• Рама кровати в сборе с ламельным(s) основанием типа К – 1 шт. • Изголовье типов p/c/w/mp/mw – 1 шт. • Изножье типов p/c/w/mp/mw – 1 шт. • Колесная рама металлическая – 2 шт. • Колесо самоориентирующееся с тормозом – не более 8 шт. • Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции – 1 шт. • Электропривод для регулировки угла наклона ножной секции – 1 шт. • Блок управления – 1 шт. • Пульт управления кровати – 1 шт. • Комплект крепежных изделий в составе: болт М6×80 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., болт

штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) -10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) – 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) – 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) – 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) – 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) – 4 шт.,

- Пульт управления кровати – 1 шт.
- Комплект крепежных изделий в составе: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) – 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) – 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) -10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 – (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) – 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) – 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) – 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) – 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) – 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., шайба

М8×60 (для колесных стоек) – 4 шт., болт М6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) – 12 шт., винт М6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) – 8 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся) – 8 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) – 6 шт., втулка Ø25×Ø10×25мм (полимерная) – 8 шт., угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) - 4 шт.

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

- Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) – 2 шт.
- Держатель документов на один карман (при необходимости) – не более 2 шт.
- Держатель документов на два кармана (при необходимости) – не более 2 шт.
- Держатель принадлежностей (при необходимости) – не более 2 шт.
- Матрац (при необходимости) – не более 2 шт.
- Матрац секционный кардио (при необходимости) – не более 2 шт.




шайба Ø8мм (для боковых ограждений) – 6 шт. • Руководство по эксплуатации – 1 шт. Принадлежности: • Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) – 2 шт. • Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) – 2 шт. • Держатель документов на один карман (при необходимости) – не более 2 шт. • Держатель документов на два кармана (при необходимости) – не более 2 шт. • Держатель принадлежностей (при необходимости) – не более 2 шт. • Матрац (при необходимости) – не более 2 шт. • Матрац секционный (при необходимости) – не более 2 шт. • Подушка секционная (при необходимости) – не более 2 шт. • Растомат (при необходимости) – не более 4 шт. • Столик сервисный (при необходимости) – не более 2 шт. • Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) – не более 4 шт.	Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) – 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) – 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) – 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) – 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) – 4 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) – 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) – 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) – 3 шт., винт М6×100 (для боковин) – 8 шт., гайка М6 (для боковин) – 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) – 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) – 12 шт., шайба Ø8мм (для изголовья и изножья) – 12 шт., шайба Ø6мм (для боковин) – 8 шт. • Руководство по эксплуатации – 1 шт. Принадлежности: • Боковое ограждение 5-ти секционное (при необходимости) – 2 шт. • Боковое ограждение 4-х секционное (при необходимости) – 2 шт. • Держатель документов на один карман (при необходимости) – не более 2 шт.	• Растомат (при необходимости) – не более 4 шт. • Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) – не более 4 шт. • Столик прикроватный (при необходимости) – 1 шт. • Столик сервисный (при необходимости) – не более 2 шт. • Устройство для подтягивания (при необходимости) – 1 шт. • Чехол водонепроницаемый (при необходимости) – не более 4 шт. • Чехол водонепроницаемый секционный кардио (при необходимости) – не более 4 шт.
---	---	---




• Столик прикроватный (при необходимости) – 1 шт. • Устройство для подтягивания (при необходимости) – 1 шт. • Чехол водонепроницаемый (при необходимости) – не более 4 шт. • Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) – не более 4 шт. • Чехол на подушку секционную (при необходимости) – не более 2 шт.	• Держатель документов на два кармана (при необходимости) - не более 2 шт. • Держатель принадлежностей (при необходимости) – не более 2 шт. • Матрац (при необходимости) – не более 2 шт. • Матрац секционный (при необходимости) – не более 2 шт. • Подушка секционная (при необходимости) – не более 2 шт. • Растомат (при необходимости) – не более 4 шт. • Столик сервисный (при необходимости) – не более 2 шт. • Стойка для внутривенных вливаний (при необходимости) – не более 4 шт. • Столик прикроватный (при необходимости) – 1 шт. • Устройство для подтягивания (при необходимости) – 1 шт. • Чехол водонепроницаемый (при необходимости) – не более 4 шт. • Чехол водонепроницаемый секционный (при необходимости) – не более 4 шт. • Чехол на подушку секционную (при необходимости) – не более 2 шт.	
---	--	--







Примечание: Принадлежностями «подушка секционная» и «чехол для подушки секционной» комплектуются исполнения кроватей с удлиненным L и универсальным U типами оснований.



Внешний вид изделия «Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями», вариант исполнения Barry MBE-2Xxx или Barry MBE-2Xxxx



Тип изголовья /изножья	с панельным основанием	с ламельным основанием
Р		

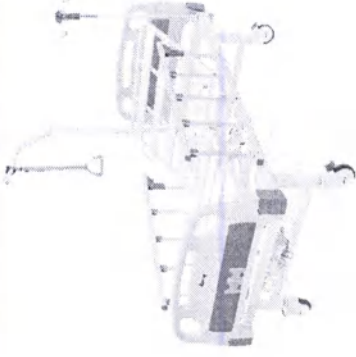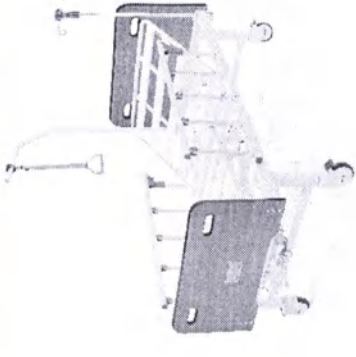
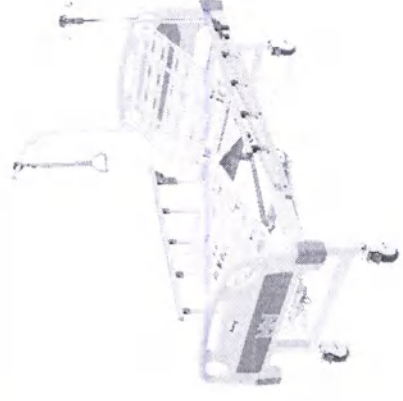
	
	
С	W

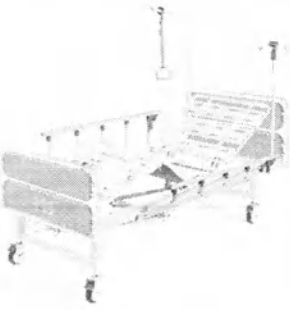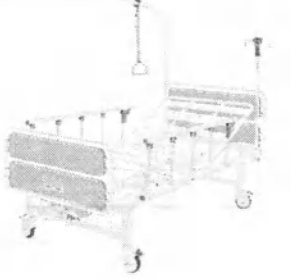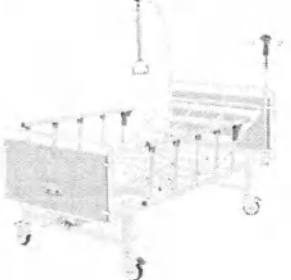
mp		
mw		
Внешний вид изделия «Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями», вариант исполнения Barry MBE-3Xxx или Barry MBE-3Xxxx		
Тип изголовья /изножья	с панельным основанием	с ламельным основанием

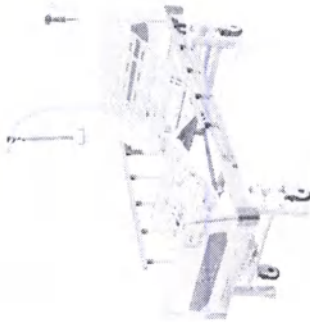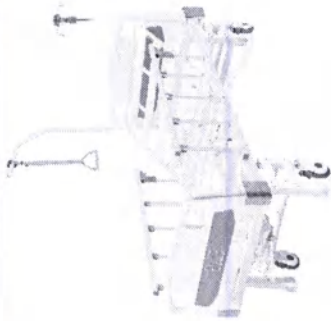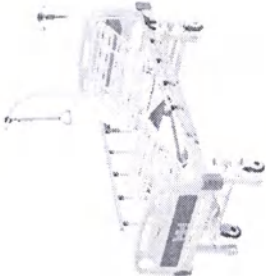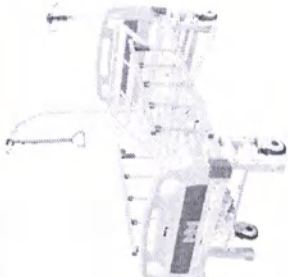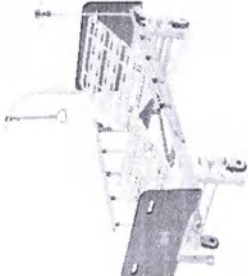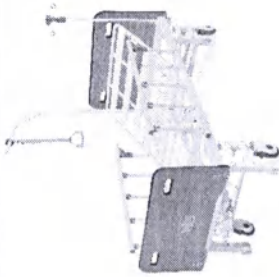p		
c		
w		

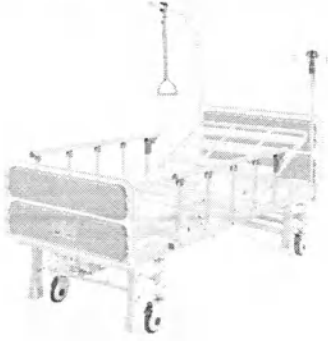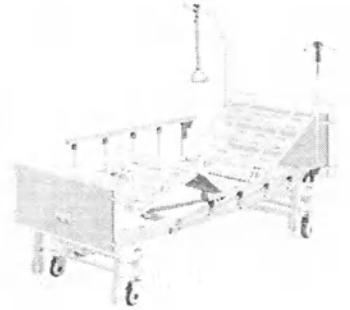
mp		
mw		
Внешний вид изделия «Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями», вариант исполнения Barry MBE-2Kxx или Barry MBE-2Kxxx		
Тип изголовья /изножья	с ламельным основанием	


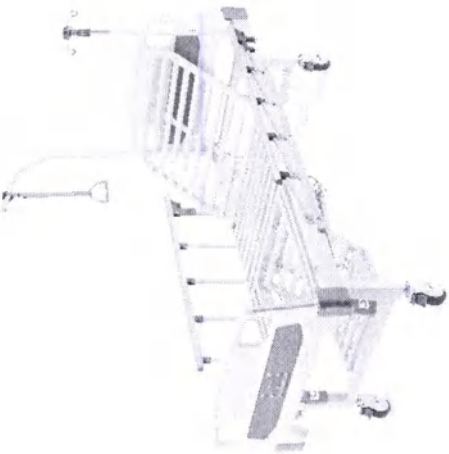
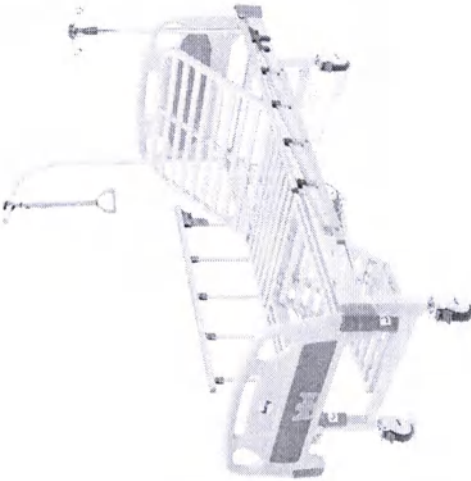
p	
c	

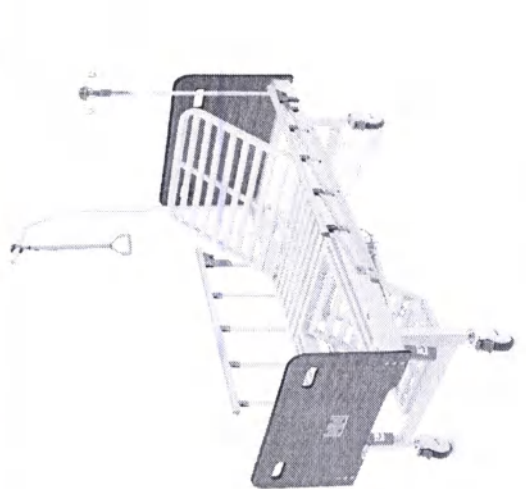
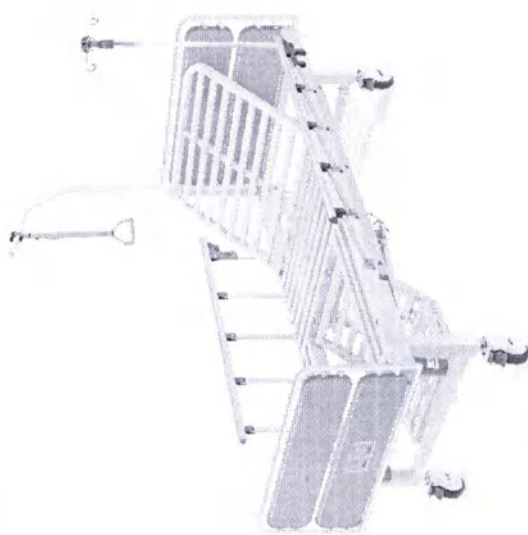
w	
mp	

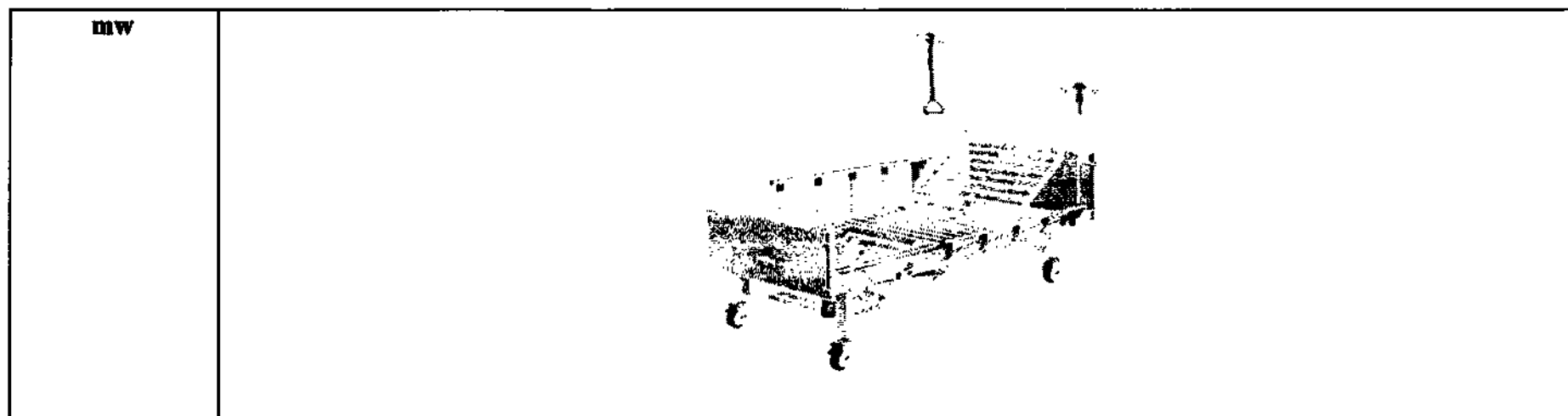



6.3 Описание конструкционных компонентов и элементов состава:

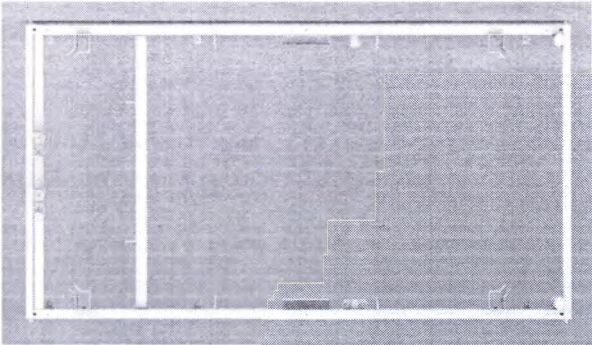
Наименование	Фото	Описание/ предназначение
Рама кровати металлическая Для вариантов исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx (исключая модификации Barry MBE-2Xwx, Barry MBE-2Xxwx Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx)		Конструкционный элемент. Предназначен для соединения колесной рамы и основания (ложа) кровати.

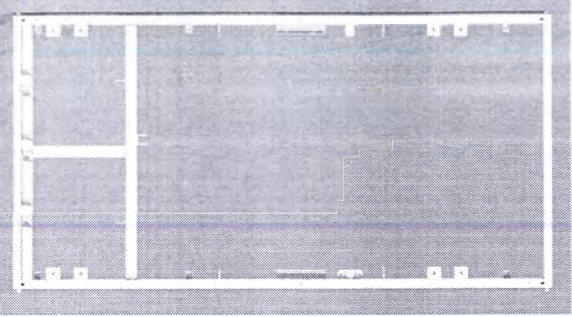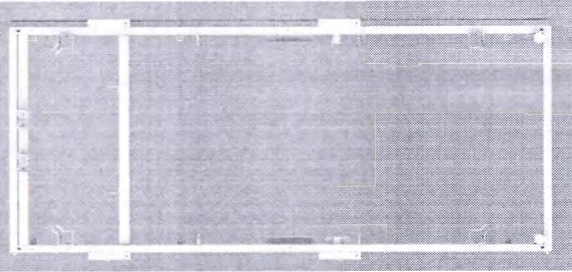
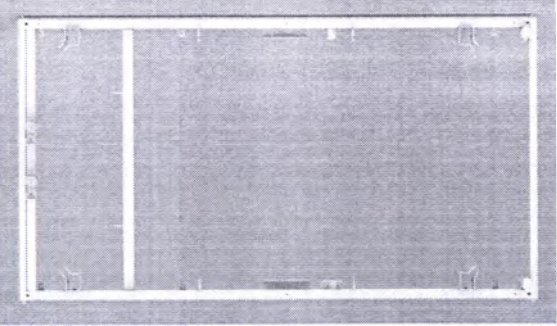
Рама кровати металлическая Для вариантов исполнений: Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx (исключая модификации Barry MBE-3Xwx, Barry MBE-3Xxwx)		Конструкционный элемент. Предназначен для соединения колесной рамы и основания (ложа) кровати.
Рама кровати металлическая Для вариантов исполнения: Barry MBE-2Xwx, Barry MBE-2Xxwx, Barry MBE-3Xwx, Barry MBE-3Xxwx,		Конструкционный элемент. Предназначен для соединения колесной рамы и основания (ложа) кровати.
Рама кровати металлическая Для вариантов исполнения: Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx		Конструкционный элемент. Предназначен для соединения колесной рамы и матрачного основания (ложа) кровати.

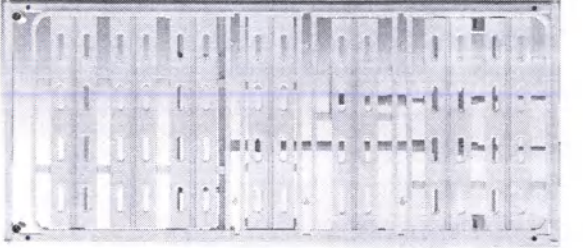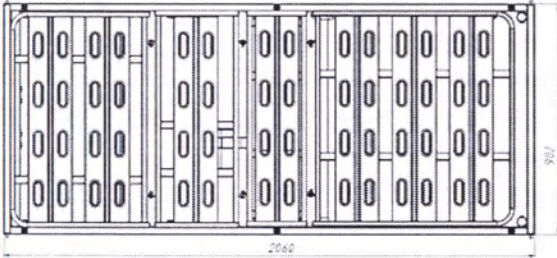
Рама кровати в сборе с панельным основанием типа S. Для вариантов исполнений: Barry MBE-xSxp, Barry MBE-xSxxp,	   Крючок-держатель 	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Габаритные размеры, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×902×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной панельной секции, (Д×Ш×В) (± 5%), не более мм: 780×844×25 размер неподвижной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×844×25 размер бедренно-ножной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×844×25 размер ножной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 540×844×25 Вес (допуск ± 5%), не более кг: 50. В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34. На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг

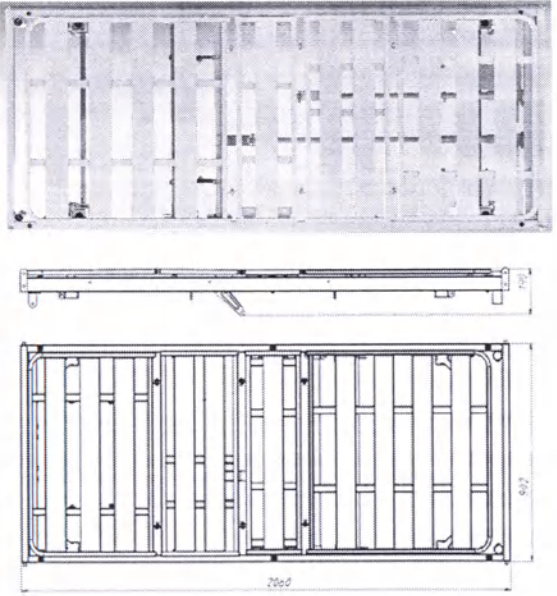
		Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа S Для вариантов исполнения: Barry MBE-xSxs, Barry MBE-xSxxs,		Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Габаритные размеры, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×902×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×844×25 размер неподвижной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×844×25 размер бедренно-ножной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×844×25 размер ножной ламельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 540×844×25 Вес, не более кг: 50

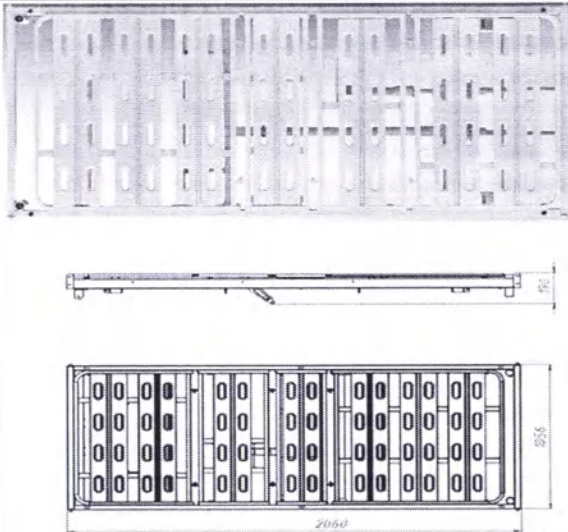
	Крючок-держатель 	В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с панельным основанием типа В Для вариантов исполнения: Barry MBE-xBxp, Barry MBE-xBxxp	 Крючок-держатель	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×1056×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×996×25 размер неподвижной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×996×25 размер бедренно-ножной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×996×25 размер ножной панельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 540×996×25 Вес, не более кг: 50

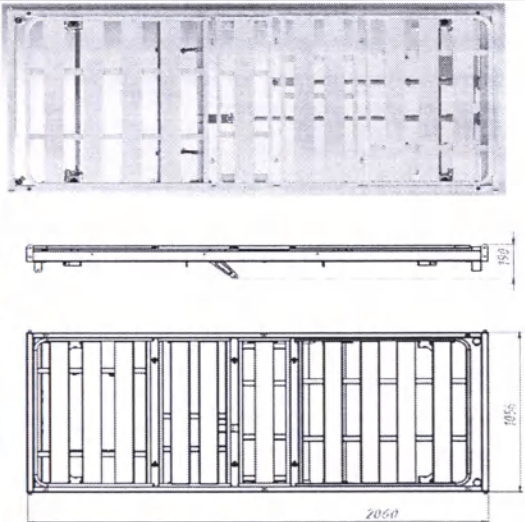
		В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм:34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм:20 На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа В Для вариантов исполнений: Barry MBE-xBxs, Barry MBE-xBxxs	 Крючок-держатель	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×1056×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×996×25 размер неподвижной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×996×25 размер бедренно-ножной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×996×25 размер ножной ламельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 540×996×25 Вес, не более кг: 50

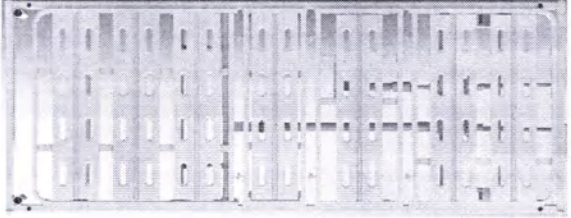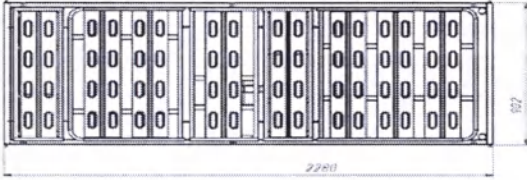
		В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20 На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с панельным основанием типа L Для вариантов исполнений: Barry MBE-xLxp, Barry MBE-xLxxp	   Крючок-держатель	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2280×902×190 (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×844×25 размер неподвижной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×844×25 размер бедренно-ножной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×844×25 размер ножной панельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 540×844×25 размер неподвижной ножной панельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 200×844×25 Вес, не более кг: 50


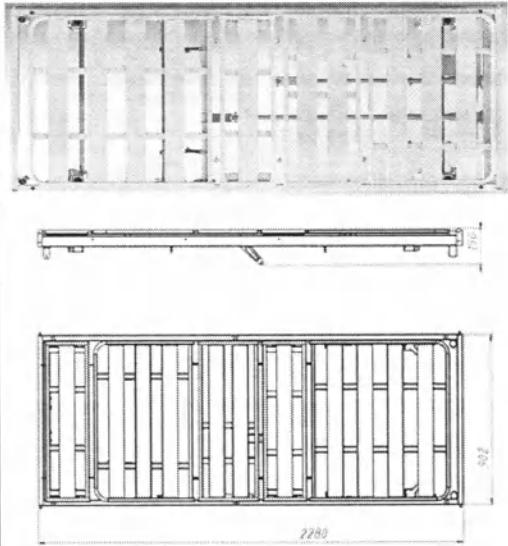
		В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа L Для вариантов исполнений: Barry MBE-xLxs, Barry MBE-xLxxs	 Крючок-держатель	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2280×902×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×840×25 размер неподвижной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×844×25 размер бедренно-ножной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×844×25 размер ножной ламельной секции матрасного основания (Д×Ш×В), не более мм: 540×844×25 размер неподвижной ножной ламельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 200×844×25 Вес, не более кг: 50



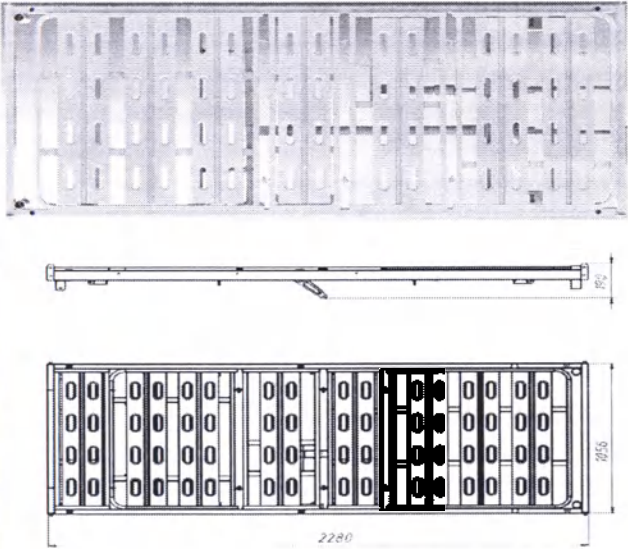
		В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с панельным основанием типа U Для вариантов исполнений: Barry MBE-xUxp, Barry MBE-xUxxp,	 Крючок-держатель	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2280×1056×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×996×25 размер неподвижной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×996×25 размер бедренно-ножной панельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×996×25 размер ножной панельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 540×844×25



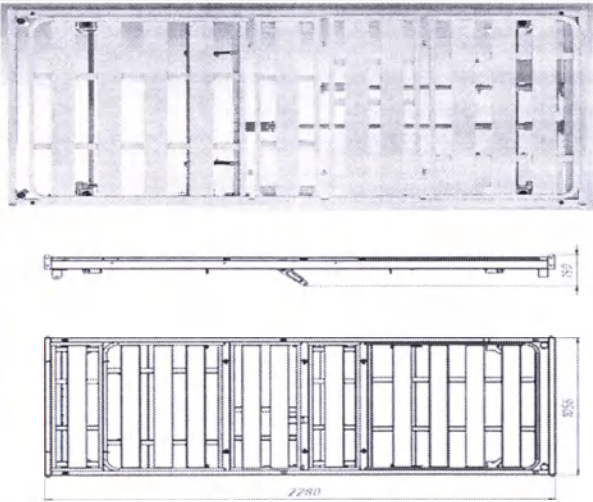
		размер неподвижной ножной панельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 200×996×25 Вес, не более кг: 50 В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с ламельным основанием типа U Для вариантов исполнений: Barry MBE-xUxs, Barry MBE-xUxxs,	 Крючок-держатель	Конструкционный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2280×1056×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×996×25 размер неподвижной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 230×996×25 размер бедренно-ножной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 320×844×25 размер ножной ламельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 540×996×25



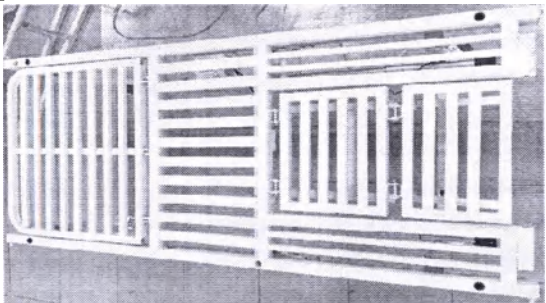
		размер неподвижной ножной ламельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 200×996×25 Вес, не более кг: 50 В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
Рама кровати в сборе с ламельным основанием Для вариантов исполнения: Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx		Конструктивный элемент. Предназначена для размещения (позиционирования) пациента на кровати. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×902×190, (при приведении всех секций в горизонтальное положение) размер спинной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 780×844×30 размер неподвижной ламельной секции, (Д×Ш×В), не более мм: 510×844×30 размер ножной ламельной секции матрасного основания, (Д×Ш×В), не более мм: 770×844×30



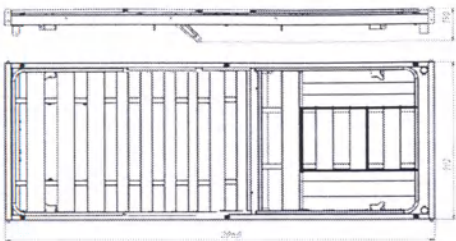
	 Крючок-держатель 	размер ножной секции матрасного основания (центральная, верхняя часть), (Д×Ш×В), не более мм: 340×440×30 Размер ножной секции матрасного основания (центральная, нижняя часть), (Д×Ш×В), не более мм: 280×440×30 Вес, не более кг: 50 В обоих углах рамы кровати, у изголовья, находятся 2 посадочных места для расположения устройства для подтягивания, Ø не более мм: 34 На раме расположены 4 отверстия (по 2 с каждой стороны) для установки стойки для внутривенных вливаний, Ø не более мм: 20. На раме кровати располагаются крючки-держатели (не более 4 штук), из стального прутка Ø6 мм, размером (Д×Ш), не более мм: 80×45 Максимальная нагрузка на крючок - держатель не более: 5 кг
--	---	--

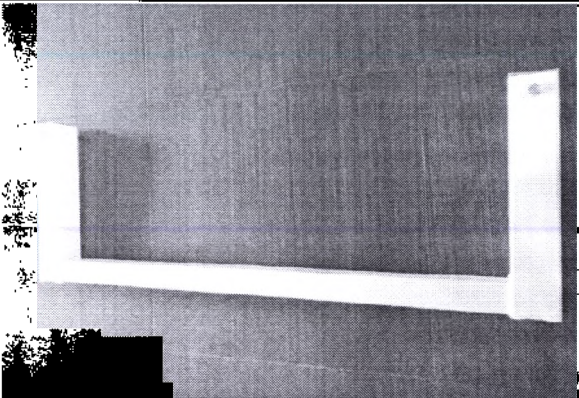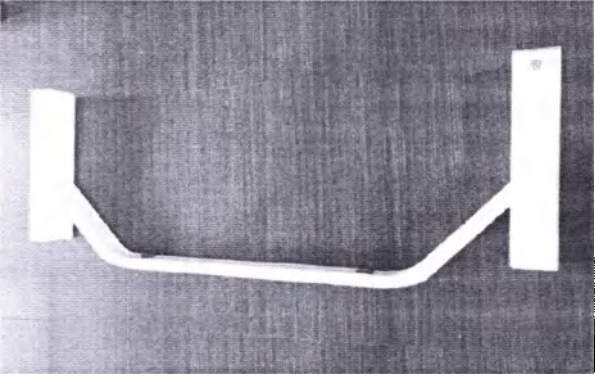
Колесная рама металлическая Для вариантов исполнений (спинная и ножная секция): Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, (спинная секция) вариантов исполнения: Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначена для крепления колес и установки рамы кровати с матрасным основанием на определенной высоте. Рама кровати в сборе с панельным основанием оснащена 2 колесными металлическими рамами размером (Д×Ш×В), не более мм: 830×60×350, Вес одной колесной рамы, не более кг: 4,3
Колесная рама металлическая (для спинной ножной секции) Для (ножной секции) вариантов исполнений: Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx		Конструкционный элемент. Предназначена для крепления колес и установки рамы кровати (ножная секция) с матрасным основанием на определенной высоте для удобства размещения пациента. Рама кровати в сборе с панельным основанием оснащена 2 колесными металлическими рамами размером Д×Ш×В, не более мм: 830×60×350, Вес одной колесной рамы, не более кг: 4,3 (для спинной и ножной секции)

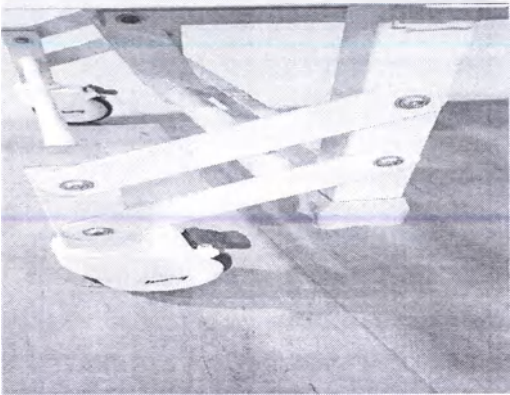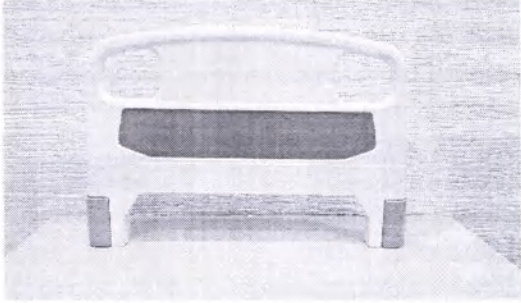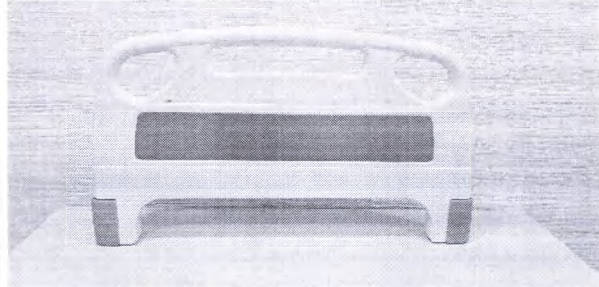Колесная рама металлическая Для вариантов исполнений: Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx		Конструкционный элемент. Предназначена для крепления колес и установки рамы кровати с матрасным основанием на определенной высоте. Подвижно крепится к приваренной опоре (при помощи регулировки высоты кровати реализуется функция смены опоры кровати с колес на опоры) Рама кровати в сборе с панельным основанием оснащена 2 колесными металлическими рамами размером Д×Ш×В, не более мм: 880×280×480, Вес, не более кг: 13
Изголовье тип р Для исполнений: Barry MBE-2Sprx, Barry MBE-2Lpx, Barry MBE-3Sprx, Barry MBE-3Lpx, Barry MBE-2Kpx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 960×100×540 Вес, не более кг: 4,1
Изголовье тип с Для исполнений: Barry MBE-2Scx, Barry MBE-2Lcx, Barry MBE-3Scx, Barry MBE-3Lcx, Barry MBE-2Kcx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 960×100×540 Вес, не более кг: 3,4

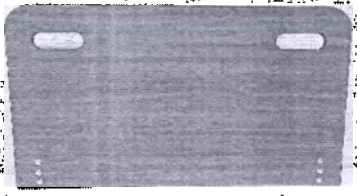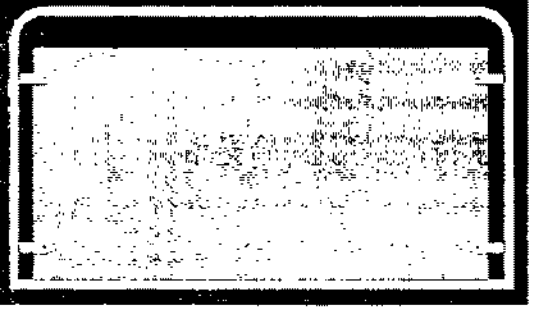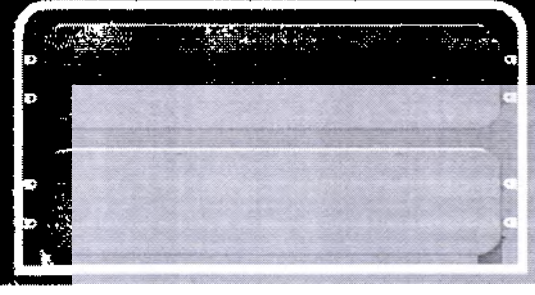
Изголовье тип w Для исполнений: Barry MBE-2Xwx, Barry MBE-3Xwx, Barry MBE-2Kwx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 1020×60×550 Вес, не более кг: 7,8
Изголовье тип mw Для исполнений: Barry MBE-2Xmwx Barry MBE-3Xmwx Barry MBE-2Kmwx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 990×60×551 Вес, не более кг: 7,1
Изголовье тип mp Для исполнений: Barry MBE-2Xmpx Barry MBE-3Xmpx Barry MBE-2Kmpx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 990×60×550 Вес, не более кг: 4,4

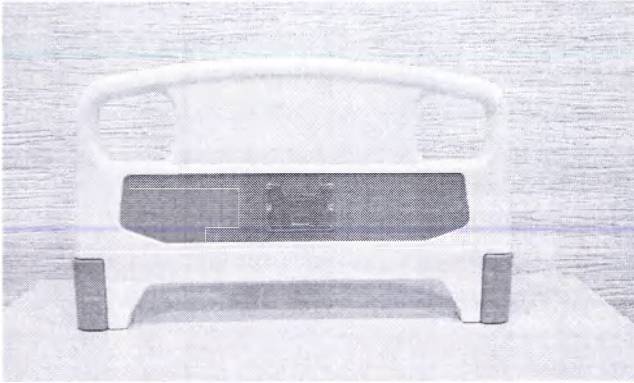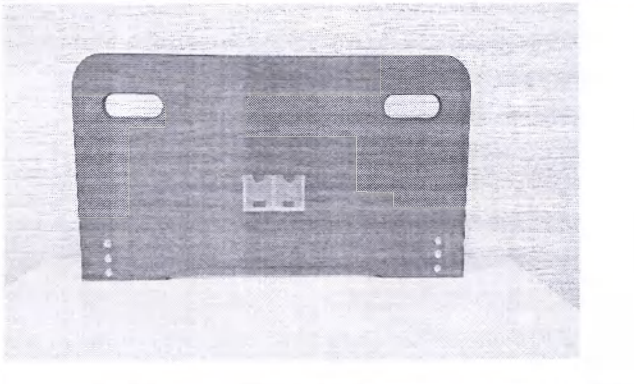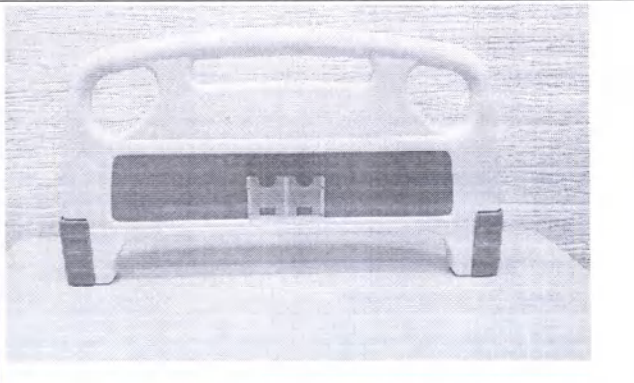Изножье тип р Для исполнений с: Barry MBE-2Sprx, Barry MBE-2Lpx, Barry MBE-3Sprx, Barry MBE-3Lpx, Barry MBE-2Kpx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 960×100×450 Вес, не более кг: 3,9
Изножье тип w Для исполнений: Barry MBE-2Xwx, Barry MBE-3Xwx, Barry MBE-2Kwx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 1020×60×465 Вес, не более кг: 6,3
Изножье тип с Для исполнений: Barry MBE-2Scx, Barry MBE-2Lcx, MBE-3Scx, Barry MBE-3Lcx, Barry MBE-2Kcx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 960×100×435 Вес, не более кг: 2,8

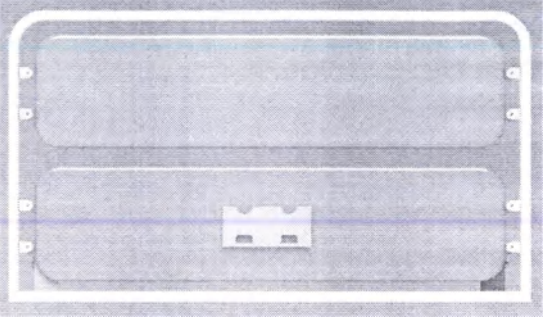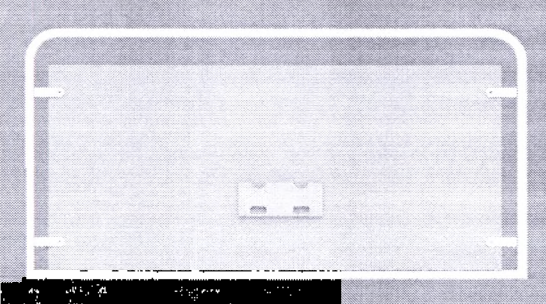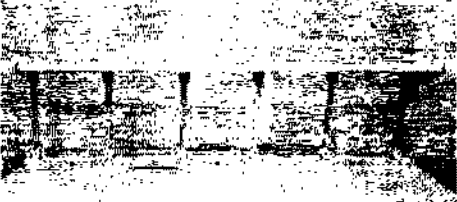Изножье тип mp Для исполнений: Barry MBE-2Xmpx Barry MBE-3Xmpx Barry MBE-2Kmpx		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 990×60×466 Вес, не более кг: 4,1
Изножье тип mw Для исполнений: Barry MBE-2Xmwх Barry MBE-3Xmwх Barry MBE-2Kmwх		Конструкционный элемент. Крепится к раме кровати. Предназначено для сборки основных элементов конструкции, обеспечивает удобное и безопасное размещение пациента. Представляет собой конструктивный элемент с габаритными размерами, (Д×Ш×В), не более мм: 990×60×466 Вес, не более кг: 6
Боковое ограждение 5-ти секционное и Боковое ограждение 4-х секционное Для исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx	5-ти секционное ограждение  4-х секционное ограждение	Конструкционный элемент. Боковое ограждение предотвращают падение пациента с ложа. Боковое ограждение является складным, они легко опускаются и не мешают подъему или пересаживанию пациента с кровати в кресло. Представляет собой конструктивный элемент в количестве 2 штук, устанавливаемый справа и слева. Боковые ограждения являются складными, они легко опускаются и не мешают подъему или пересаживанию пациента с кровати в кресло. Могут состоять состоящий из 5 или 4 секций (по выбору заказчика)

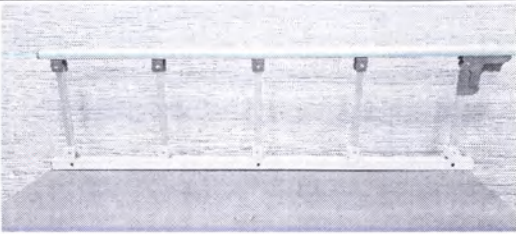		с габаритными размерами для 5 секционного ограждения, (Д×Ш×В), не более мм: 1475×430×35 Вес, не более кг для 5 секционного ограждения: 3,8 Максимально допустимая нагрузка на боковое 5 секционное ограждение не более: 20Н с габаритными размерами для 4 секционного ограждения, (Д×Ш×В), не более мм: 1180×355×35 Вес, не более кг для 4 секционного ограждения: 3,2 Максимально допустимая нагрузка на боковое 5 секционное ограждение, не более: 20Н
Колесо самоориентирующе еся с тормозом Для исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx		Предназначено для обеспечения мобильности кровати. Позволяют перемещать кровать в пределах стационара или передвигать кровать в комнате для увеличения зоны доступа к пациенту. Самоориентирующиеся колеса с тормозом могут вращаться вокруг своей оси и оснащены тормозом, который приводится в действие путем нажатия на педаль. Колеса фиксируются при помощи тормозов, когда кровать неподвижна. Конструкционный элемент. Колесо предназначено для обеспечения мобильности кровати. Число колес: 4 шт. Диаметр колеса, не более: 125 мм, толщина, не менее: 20 мм . Общая высота с опорой, не менее: 158 мм Грузоподъемность, не менее: 125 кг Общий вес не менее: 1 кг Усилие нажатия на тормоз не более: 41 Н. Усилие снятия с тормоза не более: 40 Н

Устройство для
подтягивания
Для исполнений:
Barry MBE-2Xxx,
Barry MBE-2Xxxx,
Barry MBE-2Kxx,
Barry MBE-2Kxxx,
Barry MBE-3Xxx,
Barry MBE-3Xxxx

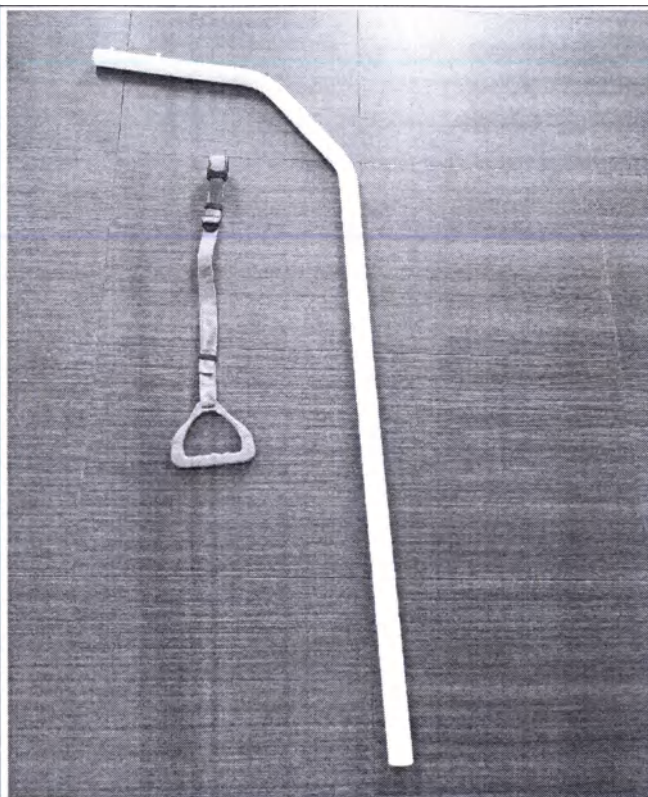

Устройство для подтягивания представляет собой Г-образную вертикальную штангу с ремнем для подтягивания и пластмассовой ручкой помогает пациенту самостоятельно менять положение тела в кровати, но и служит тренажером для поддержания формы.

Длина ремня (полная) держателя для руки, не более: 1500 мм

Габаритные размеры держателя для руки, не более: 140×140×20 мм

Вес держателя для руки, не более: 0,15 кг

Максимальная нагрузка на устройство, не более: 90 кг

Габаритные размеры основного фиксатора ремня держателя, не более: ширина 35 мм, длина 40 мм, высота 10 мм.

Габаритные размеры вспомогательного фиксатора ремня держателя (2 штуки), не более: ширина 35 мм, длина 15 мм, высота 15 мм

Габаритные размеры фиксатора сдвига для держателя, не более мм: 140×40×50 мм


Габаритные размеры фиксатора ремня держателя: ширина 35 мм, диаметр 40 мм.

Общая длина стойки устройства, не более 1820мм, диаметр стойки устройства: 34 мм

Вес общий, не более: 4 кг

Электропривод для
регулировки угла
наклона спинной
секции

Для исполнений:
Barry MBE-2Xxx,
Barry MBE-2Xxxx,
Barry MBE-3Xxx,
Barry MBE-3Xxxx

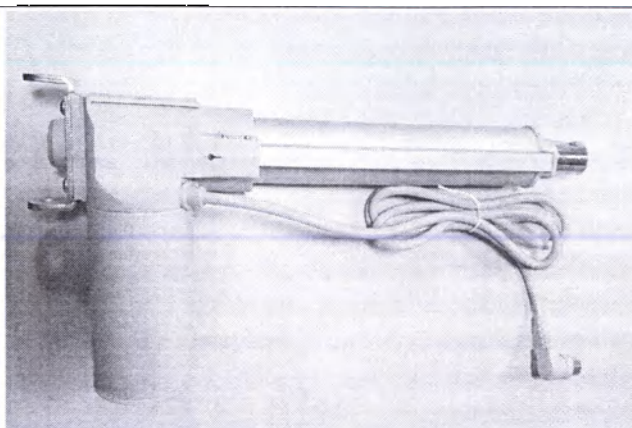

Электродвигатель, обеспечивающий регулировку угла
наклона спинной секции

Применяется для всех вариантов исполнений исключая
модификацию. Тип привода: электрический линейный
(шестеренный).

Модель: JS35DF-210/385 (или аналог)

Напряжение: 24В DC, постоянный ток: 0,8 - 4,0А,
выходная мощность: 60 Вт, крутящий момент: 0,4 Нм,
скорость: 4,5 мм/с, максимальная нагрузка: 6000Н,
рабочий ход (длина): 210 /385 мм

время полного цикла подъема/опускания -45/42сек,
температурный режим работы: от -26° до 65°C,

Непродолжительный режим работы: Макс. 10 мин, 2 мин.
ВКЛ. / 18 мин. ВЫКЛ.

степень защиты (от пыли и влаги): IP65

Габаритные размеры (в закрытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 410×80×155

Габаритные размеры (в открытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 620×80×155
(Допуск ±3%),

Вес, не более: 3 кг (Допуск ±3%)

Тип соединения с блоком управления: DIN 41524, 4-
контактный


Длина кабеля подключения к блоку управления не менее:
2,5м

Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flguu,
торговой марки «Bort» , кабель пятижильный по ISO 6722
Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм²

Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

Электропривод для
регулировки угла
наклона бедренно-
ножной и ножной
секции

Для исполнений:
Barry MBE-2Xxx,
Barry MBE-2Xxxx
Barry MBE-3Xxx,
Barry MBE-3Xxxx

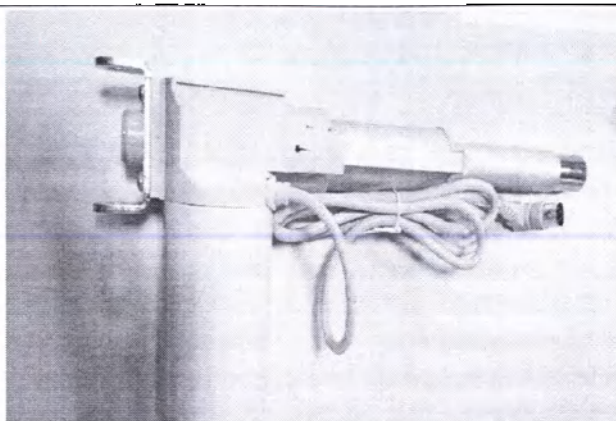

Электродвигатель, обеспечивающий регулировку угла
наклона бедренно-ножной и ножной секции

Применяется для всех вариантов исполнений. Тип
привода: электрический линейный (шестеренный).

Модель: JS35DF-85/260 (или аналог)

Напряжение: 24В DC , постоянный ток: 0,8 - 4,0А,
выходная мощность: 60 Вт, крутящий момент: 0,4 Нм,
скорость: 4,5 мм/с, максимальная нагрузка: 6000Н,
рабочий ход (длина): 85/260мм, время полного цикла
подъема/опускания -17/16 сек, температурный режим
работы: от -26° до 65°C,

Непродолжительный режим работы: Макс. 10 мин, 2 мин.
ВКЛ. / 18 мин. ВЫКЛ.

степень защиты (от пыли и влаги): IP65

Габаритные размеры (в закрытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 280×80×155

Габаритные размеры (в открытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 365×80×155

(Допуск ±3%), Вес, не более: 3 кг (Допуск ±3%)


Тип соединения с блоком управления: DIN 41524, 4-
контактный

Длина кабеля подключения к блоку управления не менее:
2,5м

Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flгуу,
торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722
Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм²

Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

Электропривод для
регулировки
высоты подъёма
основания
матрачного
Для исполнений:
Barry MBE-3Xxx,
Barry MBE-3Xxxx

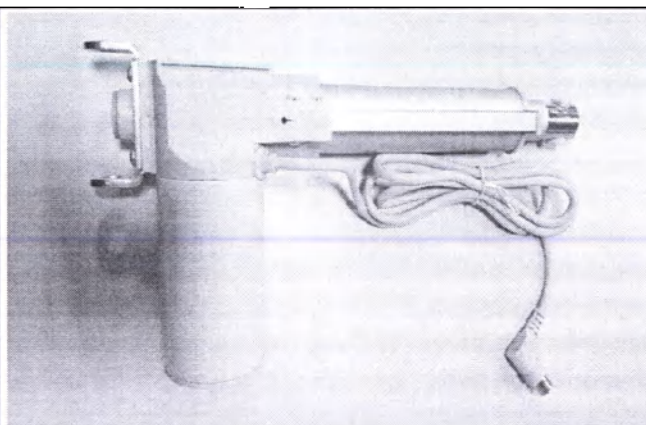

Электродвигатель, обеспечивающий регулировку угла наклона высоты подъёма основания матрачного кровати. Применяется только для вариантов исполнений MBE-3Xxx, MBE-3Xxxx. Тип привода: электрический линейный (шестеренный).

Модель: JS35DF-150/325 (или аналог)

Напряжение: 24В DC, постоянный ток: 0,8 - 4,0А, выходная мощность: 60 Вт, крутящий момент: 0,4 Нм, скорость: 8 мм/с, максимальная нагрузка: 3000Н, рабочий ход (длина, мин/макс): 150/325 мм, время полного цикла подъема/опускания -32/30сек, температурный режим работы: от -26° до 65°C,

Непродолжительный режим работы: Макс. 10 мин, 2 мин. ВКЛ. / 18 мин. ВЫКЛ.

степень защиты (от пыли и влаги): IP65

Габаритные размеры (в закрытом состоянии), не более (Д×Ш×В), мм: 350×80×155

Габаритные размеры (в открытом состоянии), не более (Д×Ш×В), мм: 500×80×155

(Допуск ±3%), Вес, не более: 3 кг (Допуск ±3%)

Тип соединения с блоком управления

DIN 41524, 4-контактный


Длина кабеля подключения к блоку управления не менее: 2,5м

Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flryu, торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722 Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм²

Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

Электропривод для
регулировки угла
наклона спинной
секции

Для исполнений:
Barry MBE-2Kxx,
Barry MBE-2Kxxx

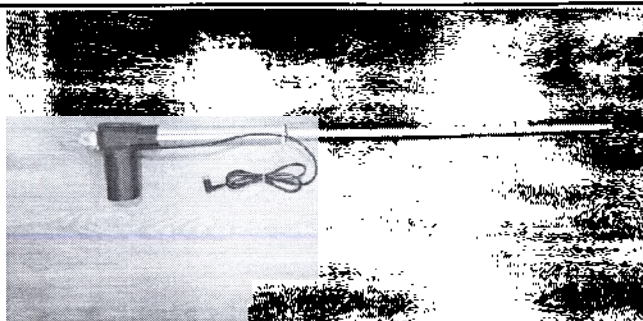

Электродвигатель, обеспечивающий регулировку угла
наклона спинной секции

Применяется для всех вариантов исполнений исключая
модификацию. Тип привода: электрический линейный
(шестеренный).

Модель: JS35DF-200/1160 (или аналог)

Напряжение: 24В DC, постоянный ток: 0,8 - 4,0А,
выходная мощность: 60 Вт, крутящий момент: 0,4 Нм,
скорость: 4,5 мм/с, максимальная нагрузка: 6000Н,
рабочий ход (длина): 200 /1160 мм

время полного цикла подъема/опускания -42/40сек,
температурный режим работы: от -26° до 65°C,
Непродолжительный режим работы: Макс. 10 мин, 2 мин.
ВКЛ. /18 мин. ВЫКЛ.

степень защиты (от пыли и влаги): IP65

Габаритные размеры (в закрытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 1200×80×155

Габаритные размеры (в открытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 1400×80×155
(Допуск ±3%),

Вес, не более: 3 кг (Допуск ±3%)

Тип соединения с блоком управления: DIN 41524, 4-
контактный


Длина кабеля подключения к блоку управления не менее:
2,5м

Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flryu,
торговой марки «Bort» , кабель пятижильный по ISO 6722
Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм²

Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

Электропривод для
регулировки угла
наклона ножной
секции

Для вариантов
исполнения: МВЕ-
2Кхх, МВЕ-2Кххх

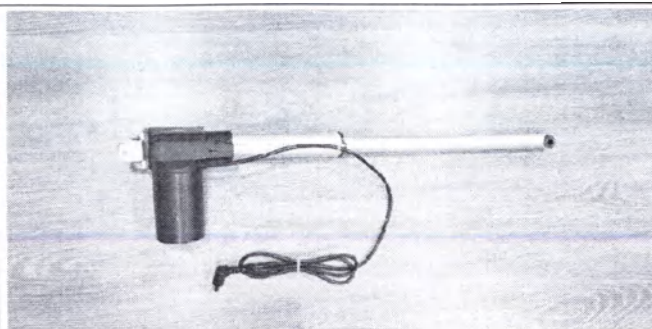

Электродвигатель, обеспечивающий регулировку угла
наклона ножной секции

Применяется для всех вариантов исполнений. Тип
привода: электрический линейный (шестеренный).

Модель: JS35DF-135/645 (или аналог)

Напряжение: 24В DC , постоянный ток: 0,8 - 4,0А,
выходная мощность: 60 Вт, крутящий момент: 0,4 Нм,
скорость: 4,5 мм/с, максимальная нагрузка: 6000Н,
рабочий ход (длина): 135/645мм, время полного цикла
подъема/опускания -27/25 сек, температурный режим
работы: от -26° до 65°С,

Непродолжительный режим работы: Макс. 10 мин, 2 мин.
ВКЛ. / 18 мин. ВЫКЛ.

степень защиты (от пыли и влаги): IP65

Габаритные размеры (в закрытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 670×80×155

Габаритные размеры (в открытом состоянии), не более
(Д×Ш×В), мм: 805×80×155

(Допуск ±3%), Вес, не более: 3 кг (Допуск ±3%)




Тип соединения с блоком управления: DIN 41524, 4-
контактный

Длина кабеля подключения к блоку управления не менее:
2,5м

Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flryu,
торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722
Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм²

Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

Блок управления
Для исполнений:
Barry MBE-2Xxx,
Barry MBE-2Xxxx,
Barry MBE-2Kxx,
Barry MBE-2Kxxx

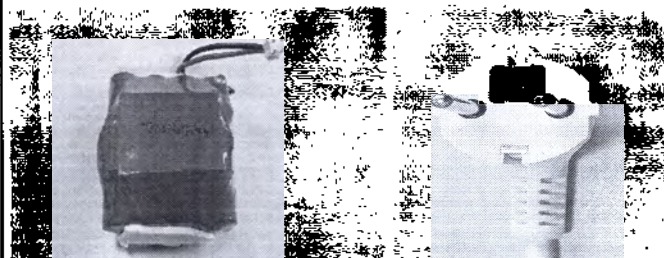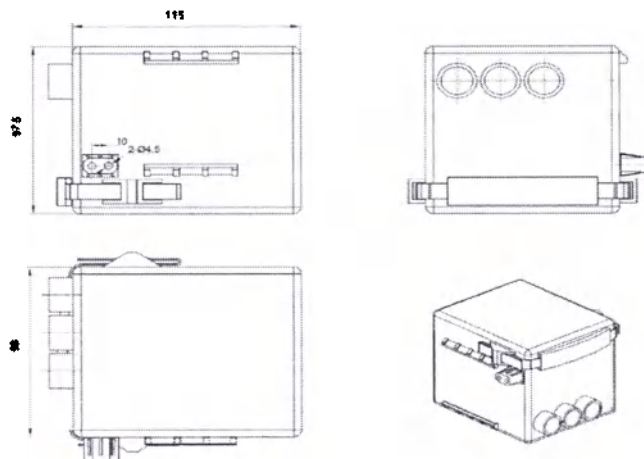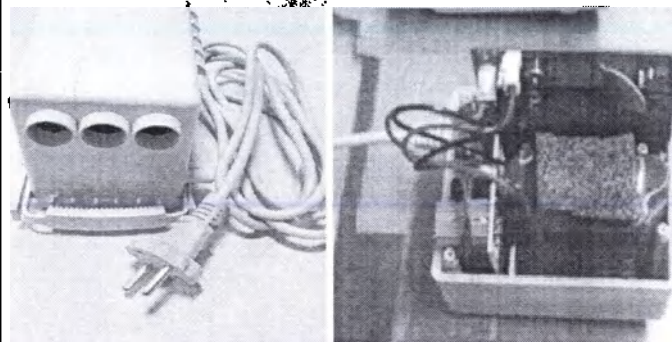

Блок управления соединяет электродвигатели для регулировки угла наклона спинной секции, регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции, пульт управления и кабель питания.

Применяется только для вариантов исполнений Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx.

Модель: JS35KAA-2 (или аналог)

Напряжение питания: 110 - 230 В AC, частота питания: 50/60Гц,

выходное напряжение: 24В DC,

Ток на вых. (макс): 2А

Число выходных каналов :3,

тип выходного канала: DIN 41524, 4-контактный

Степень защиты (от пыли и влаги): IPX6

длина кабеля для подключения питания не менее: 2,5м

Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flгуу, торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722 Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм²

Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

Тип вилки: CEE 7/7

Габаритные размеры, не более (Д×Ш×В) мм: 115×100×100



Вес, не более кг: 2,5



Внутренняя аккумуляторная батарея:


Габаритные размеры, не более (Д×Ш×В) мм: 80×50×70



Вес, не более кг: 0,5

Емкость, mAh: 2000

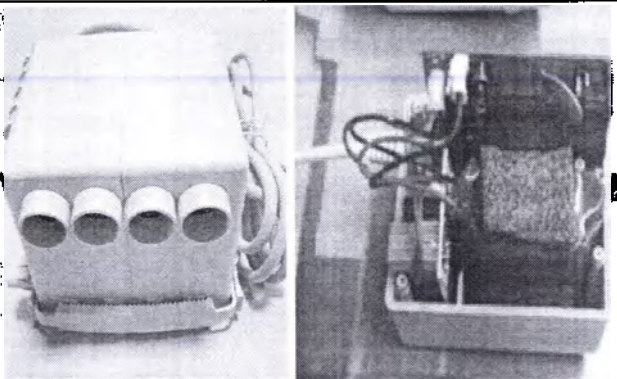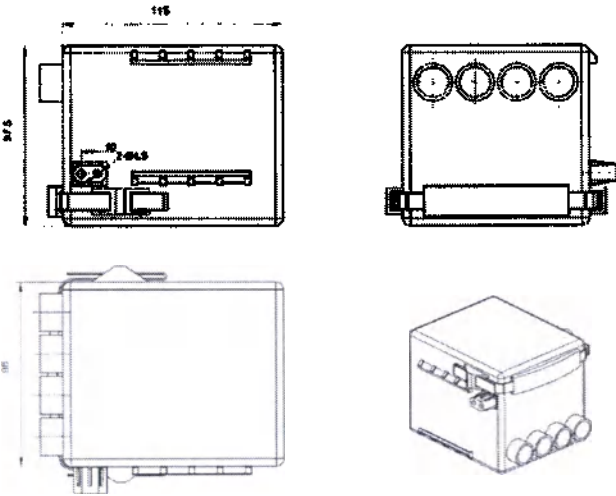
		Марка: Li-ion 18650 Номинальное напряжение, В:24 Количество циклов до полного разряда: 50 Тип разъема подключения: JST XH 2.54 (2Pin)
Блок управления Для исполнений: Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx	 	Блок управления соединяет электродвигатели для регулировки угла наклона спинной секции, регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции, регулировки высоты положения основания матрасного кровати, пульт управления и кабель питания. Применяется только для вариантов исполнений Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx. Модель: JS35KAA-3 (или аналог) Напряжение питания: 110 - 230 В AC, частота питания: 50/60Гц, выходное напряжение: 24В DC, Ток на вых. (макс): 2А Число выходных каналов: 4, тип выходного канала: DIN 41524, 4-контактный длина кабеля для подключения питания не менее: 2,5м Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Fryu, торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722 Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм² Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай) Тип вилки: CEE 7/7 Степень защиты (от пыли и влаги): IPX6,

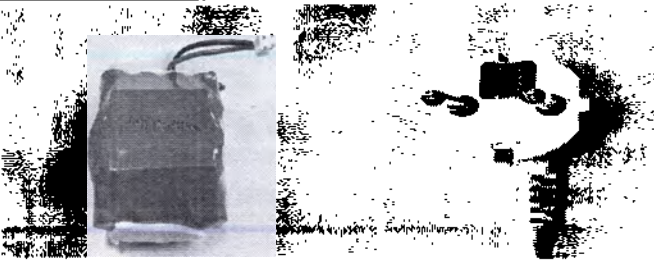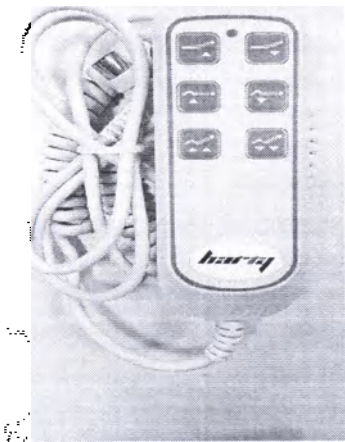
		Габаритные размеры, не более (Д×Ш×В) мм: 115×100×100 Вес, не более кг: 2,5 Внутренняя аккумуляторная батарея: Габаритные размеры, не более (Д×Ш×В) мм: 80×50×70 Вес, не более кг: 0,5 Емкость, mAh: 2000 Марка: Li-ion 18650 Номинальное напряжение: 24 В Количество циклов до полного разряда: 50 Тип разъема подключения: JST XH 2.54 (2Pin)
Пульт управления кровати Для исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx		Предназначен для регулировки угла наклона спинной секции, регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции/ножной секции, синхронной регулировки обеих секций. Применяется только для вариантов исполнений Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx (исключая модификации Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx). Длина кабеля, не менее 1,5 м. Штекер подключения к блоку управления: DIN 41524, 5-контактный. Напряжение питания, не более: 30 В. Степень защиты (от пыли и влаги): IPX4, Габаритные размеры, без учета длины кабеля и держателя (Д×Ш×В), не более 170×58×20 мм. Габаритные размеры, без учета длины кабеля, с держателем (Д×Ш×В), не более 170×58×55 мм. Вес, не более: 0,5 кг; Количество кнопок: 6. Размер нажимной поверхности каждой кнопки: не более 15×15 мм. Усилие нажатия на клавишу: не более 15 Н.

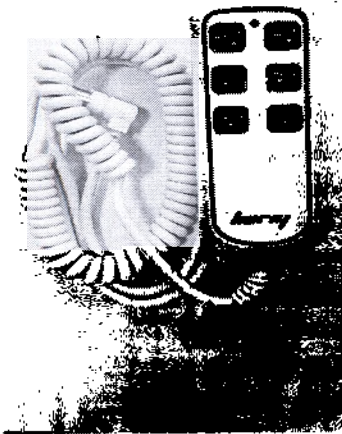		Длина кабеля подключения к блоку управления, не более: 3 м Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flгуу, торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722 Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм² Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)
Пульт управления кровати Для исполнений: Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx		Предназначен для регулировки угла наклона спинной секции, регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции, регулировки высоты положения основания матрасного кровати Применяется только для вариантов исполнений Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx. Длина кабеля, не менее 1,5 м. Штекер подключения к блоку управления: DIN 41524, 5-контактный. Напряжение питания: не более 30 В. Степень защиты (от пыли и влаги): IPX4, Габаритные размеры, без учета длины кабеля и держателя (Д×Ш×В), не более 170×58×30 мм. Габаритные размеры, без учета длины кабеля, с держателем (Д×Ш×В), не более 170×58×55 мм. Вес, не более: 0,5 кг; Количество кнопок: 6. Размер нажимной поверхности каждой кнопки: не более 15×15 мм. Усилие нажатия на клавишу: не более 15 Н. Длина кабеля подключения к блоку управления, не более :3 м Тип кабеля : Кабель ПВХ низковольтный тип Flгуу, торговой марки «Bort», кабель пятижильный по ISO 6722 Standard, сечение каждой жилы не более 1,0 мм² Производитель: Cb (Xiamen) Industrial Co., Ltd. (Китай)

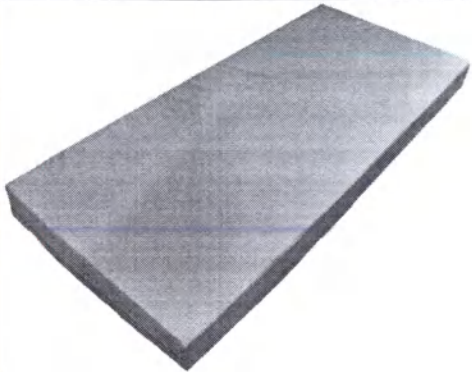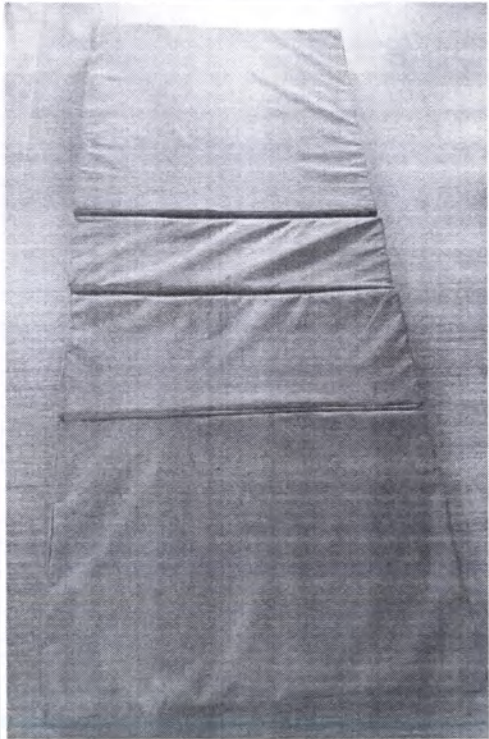Матрац Для исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx Поставляется при необходимости.		Матрац многоразового использования, односегментный, разработанный для размещения на основании для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, на которой можно лежать, отдыхать и спать. Габаритный размер общий для матраца, (Д×Ш×В), не более мм: Для основания типа S: 2060×850×85 Для основания типа B: 2060×950×85 Для основания типа L: 2060×850×85 Для основания типа U: 2060×950×85 Вес матраца S, B, L, U, не более кг: 9
Матрац секционный Для исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx (исключая модификации Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) Поставляется при необходимости.		Матрац многоразового использования, который разделен на 4 секции, разработанный для размещения на основании для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, на которой можно лежать, отдыхать и спать. Для основания типа S, не более мм: Габаритный размер спинного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 850×850×85 Габаритный размер неподвижного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 250×850×85 Габаритный размер бедренно-ножного сегмента матраца (Д×Ш×В), не более мм: 330×850×85 Габаритный размер ножного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 600×850×85 Габаритный размер общий для матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 2080×850×85

		Для основания типа В, не более мм: Габаритный размер спинного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 850×950×85 Габаритный размер неподвижного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 240×950×85 Габаритный размер ножного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 590×950×85 Габаритный размер общий для матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×950×85 Для основания типа L: 2060×850×85 Габаритный размер спинного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 850×850×85 Габаритный размер неподвижного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 850×240×85 Габаритный размер ножного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 590×850×85 Габаритный размер общий для матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 2060×850×85 Для основания типа U: 2060×950×85 Габаритный размер спинного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 850×950×85 Габаритный размер неподвижного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 950×240×85 Габаритный размер ножного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 590×950×85
--	--	--

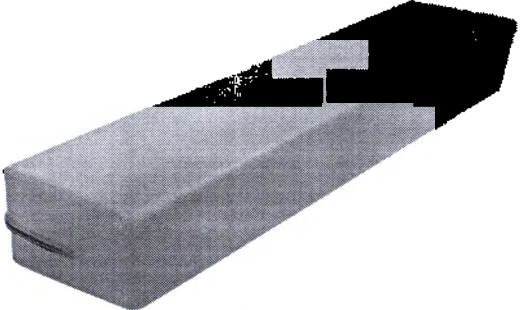		Габаритный размер общий для матраца, (Д×Ш×В), не более мм: Для основания типа S: 2060×850×85 Для основания типа B: 2060×950×85 Для основания типа L: 2060×850×85 Для основания типа U: 2060×950×85 Вес матраца S, B, L, U, не более кг: 9
Подушка секционная Для исполнений: Ваггу МВЕ-2Lxx, Ваггу МВЕ-2Lxxx, Ваггу МВЕ-3Uxx, Ваггу МВЕ-3Uxxx (исключая модификации Ваггу МВЕ-2Kxx, Ваггу МВЕ-2Kxxx) Поставляется при необходимости.		Подушка секционная многоразового использования, односегментная, разработанная для размещения на основании для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, при основании кровати типа L и U для неподвижной ножной секции. Габаритные размеры общие, (Д×Ш×В), не более мм: Для основания типа L: 220×850×85 Для основания типа U: 220×950×85 Вес, не более кг: 0,6
Матрац секционный (кардио) Для исполнений: Ваггу МВЕ-2Kxx, Ваггу МВЕ-2Kxxx Поставляется при необходимости.		Матрац многоразового использования, прочный тканевый, который разделен на 3 сегмента, разработанный для размещения на основании для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, на которой можно лежать, отдыхать и спать. Габаритный размер неподвижного сегмента матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 565×820×85 Габаритный размер ножного сегмента матраца (верхнего сегмента) (Д×Ш×В), не более мм: 380×460×85

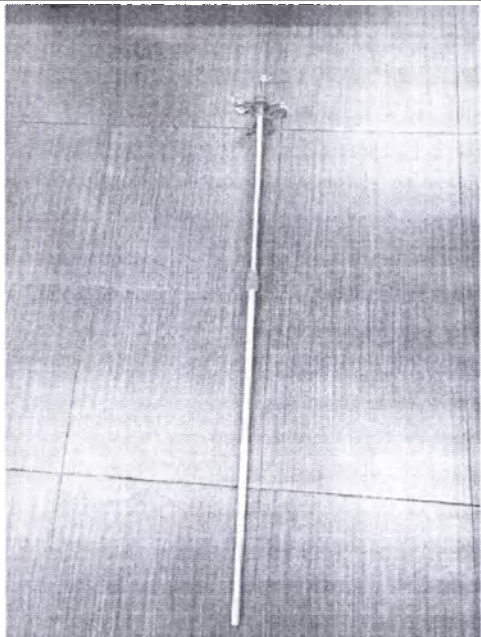		Габаритный размер ножного сегмента матраца (нижнего сегмента) (Д×Ш×В), не более мм: 345×460×85 Габаритный размер общий для матраца, (Д×Ш×В), не более мм: 2000×820×85 Вес матраца, не более кг: 9
Стойка для внутривенных вливаний. Для всех исполнений поставляется при необходимости		Конструкция в виде штанги для различных ёмкостей и устройств для подачи жидкостей. Предназначена, как правило, для использования в целях инфузионной терапии или переливания крови. На штангу могут навешиваться/крепиться всевозможные инфузионные пакеты, бутылки и вспомогательные устройства. Количество крючков для крепления – 4 шт. Расстояние между крючками: не менее 100 мм. Длина крючка, не менее: 30 мм. Максимальная нагрузка на каждый крючок не более 3 кг. Высота держателя крючков 28 мм. Диаметр (max) держателя крючков 55 мм. Диаметр (min) держателя крючков 47 мм. Стойка устанавливается усеченным конусным основанием в специальное отверстие на раме. Высота усеченного конусного основания 15 мм. Диаметр усеченного конусного основания 19 мм. Диаметр стойки 19 мм. Высота стойки регулируется центральным фиксатором. Минимальная высота 800 мм. Максимальная высота 1450 мм. Вес стойки, не более 0,3 кг.

Столик
прикроватный

Для всех
исполнений
поставляется
при необходимости.



Предназначен для размещения непосредственно поверх кровати с целью обеспечения пациенту, находящемуся в постели, возможности для приёма пищи, чтения или письма. Представляет собой С-образную металлическую раму со столешницей, на которой могут размещаться предметы, необходимые пациенту, смонтированную на колёсиках для обеспечения мобильности при ее перемещении поверх кровати. Столик регулируется по высоте винтовыми зажимами и имеет возможность наклона и фиксации столешницы - например, чтобы положить книгу, газету или альбом для рисования. Столешница допускает влажную дезинфекцию и местный нагрев. Для удобства перемещения столик оснащен 2 колесами с тормозами.

Габаритные размеры Д×Ш×В, 600×400×(700-1200) мм

Толщина столешницы 25 мм.

Высота столешницы регулируется по высоте (мин/максимальное) при помощи винтового зажима в пределах диапазона: 700 – 1200 мм

Предельная рабочая равномерно распределенная нагрузка, не менее: 8 кг

Общая масса: 8,5 кг

Общее количество колес / количество колес, оборудованных индивидуальным тормозом: 4/2 шт/шт

Диаметр колеса: 50 мм


Грузоподъемность: 50 кг

Усилие нажатия на тормоз: ≤ 20 Н

Усилие снятия с тормоза: ≤ 18 Н


Функционирование тормозов на самоориентирующихся колесах:

При включении тормозов на самоориентирующихся колесах столика прикроватного не должно происходить

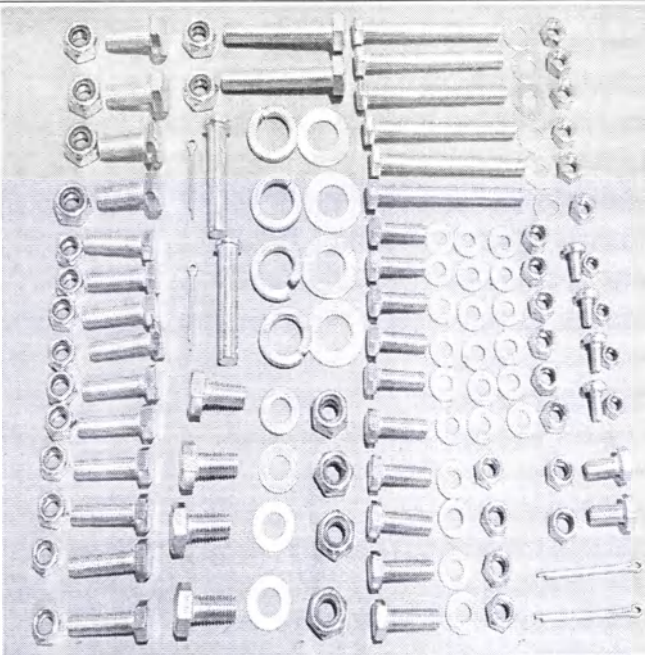		непредусмотренного перемещения изделия в положении эксплуатации по поверхности с углом наклона 5° относительно горизонтальной плоскости Усилие, необходимое для перемещения столика прикроватного с равномерно распределенной по столешнице номинальной нагрузкой (8 кг) по твердой плоской поверхности: $\leq 15 \text{ Н}$
Комплект крепежных изделий, в составе: Применяется только для вариантов исполнений: Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx, (исключая модификации Barry MBE-2Xwx, Barry MBE-2Xxwx, Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx)		Необходим для крепежа кровати Состав: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) – 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) – 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) – 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) – 4 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся для колесных стоек, рамы, для механизма регулировки спинной и ножной секций) – 22 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 6 шт., гайка М10 (для механизма регулировки наклона секций, рамы) – 10 шт., гайка М16 (для колесных стоек) – 4 шт. шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 22 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций) – 14 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) – 6 шт.


Комплект
крепежных
изделий, в составе:


Применяется
только для
вариантов
исполнений
Barry MBE-2Xwx,
Barry MBE-2Xhwx,
(исключая
модификации
Barry MBE-2Kwx,
Barry MBE-2Khwx)

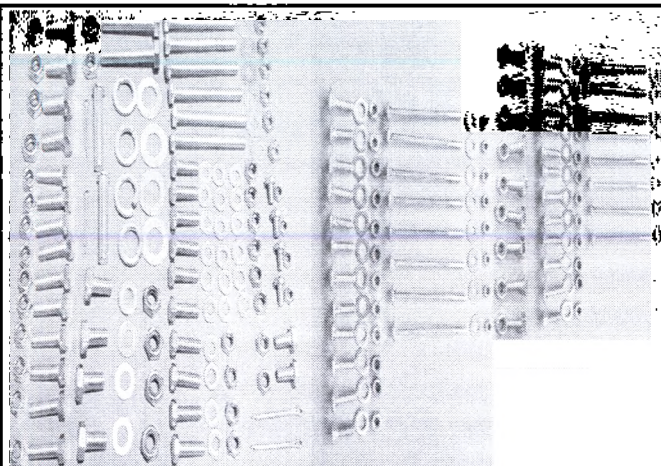




Предназначен для крепления составных частей кровати и принадлежностей.


Состав: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) – 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) – 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) – 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) – 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) – 2 шт., гайка М8 – (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) – 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) – 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) – 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) – 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) – 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) – 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) – 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) – 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) – 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) – 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) – 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) – 4 шт.,



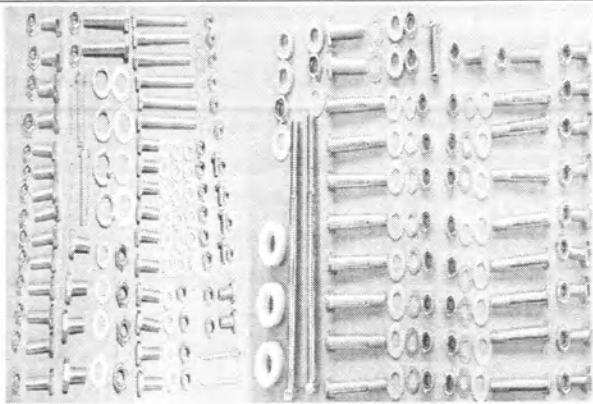
		шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) – 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) – 3 шт.
Комплект крепежных изделий, в составе: Применяется только для вариантов исполнений Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx, (исключая модификации Barry MBE-3Xwx, Barry MBE-3Xwxw)		Предназначен для крепления составных частей кровати и принадлежностей. Состав: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) – 3 шт., шплинт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) – 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 – (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) – 4 шт., гайка М10 (для крепления колесных стоек, ножек, механизм регулировки наклонных секций, рамы, амортизатора) – 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесные стойки, ножек) – 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) – 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек, ножек) – 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., шайба Ø16мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба Ø16мм (пружинная для колесных стоек) – 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) – 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) – 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений)

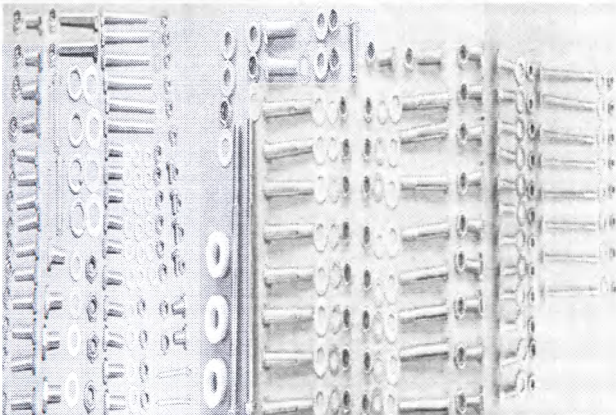		– 6 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 6 шт., шайба Ø8мм (для боковых ограждений) – 6 шт., шайба Ø24×Ø8×4 мм (полимерная для амортизатора) – 4 шт., шайба Ø24×Ø8×7 мм (полимерная для амортизатора) – 1 шт., втулка Ø28×Ø15×20мм (полимерная для амортизатора) – 3 шт.
Комплект крепежных изделий, в составе: Применяется только для вариантов исполнений Barry MBE-3Xwx, Barry MBE-3Xwxw		Предназначен для крепления составных частей кровати и принадлежностей. Состав: штифт 10×50 (для механизма регулировки наклона секций) – 3 шт., шплицт 3×40 (для механизма регулировки наклона секций, спинной секции) – 5 шт., болт М8×30 (для колесных стоек) - 10 шт., болт М8×25 (для крепления ножной секции) - 4 шт., болт М8×15 (для крепления рамы) - 2 шт., гайка М8 – (для крепления рамы, ножной секции, спинной секции) - 14 шт., шайба Ø8мм (полимерная для крепления рамы, ножной секции) – 22 шт., шайба Ø12мм (полимерная для колесных стоек) – 16 шт., болт М12×45 (для амортизатора) - 2 шт., болт М10×60 (для механизма регулировки наклона секций) – 2 шт., болт М10×25 (для механизма регулировки наклона секций) – 4 шт., болт М10×20 (для крепления рамы) – 4 шт., гайка М10 (для крепления механизма регулировки наклонных секций, рамы, колесных стоек, ножки) – 35 шт., шайба Ø10мм (для крепления рамы, для механизма регулировки наклона секций, колесных стоек) – 26 шт., шайба Ø12мм (для амортизатора) - 4 шт., винт М10×75 (для колесных стоек и ножек) – 16 шт., винт М6×12 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., гайка М6 (для крепления стойки для внутривенных вливаний) – 4 шт., шайба

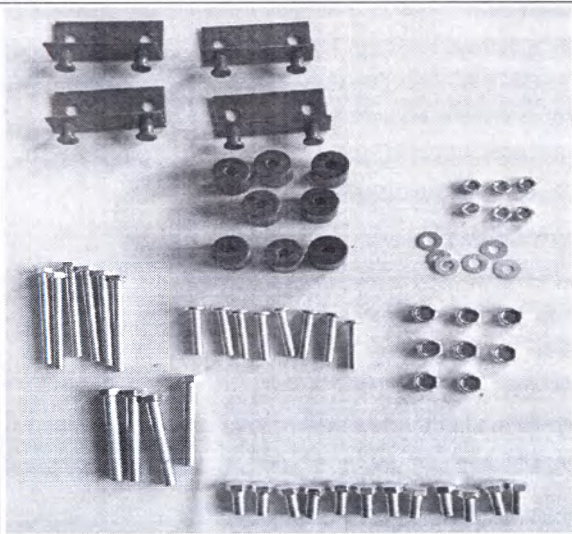		$\varnothing 16$мм (для колесных стоек) – 4 шт., шайба $\varnothing 16$мм (пружинная для колесных стоек) – 4 шт., гайка М16 (для колесных стоек) – 4 шт., болт М12×80 (для амортизатора) – 2 шт., болт М8×80 (для крепления боковых ограждений) – 4 шт., гайка М8 (для боковых ограждений) – 4 шт., шайба $\varnothing 8$мм (для боковых ограждений) – 4 шт., шайба $\varnothing 24 \times \varnothing 8 \times 4$ мм (полимерная для амортизатора) – 4 шт., шайба $\varnothing 24 \times \varnothing 8 \times 7$ мм (полимерная для амортизатора) – 1 шт., втулка $\varnothing 28 \times \varnothing 15 \times 20$мм (полимерная для амортизатора) – 3 шт., винт М6×100 (для боковин) – 8 шт., гайка М6 (для боковин) – 8 шт., винт М8×27 (для изголовья и изножья) – 12 шт., гайка М8 (для изголовья и изножья) – 12 шт., шайба $\varnothing 8$мм (для изголовья и изножья) – 12 шт., шайба $\varnothing 6$мм (для боковин) – 8 шт.
Комплект крепежных изделий, в составе: Применяется только для вариантов исполнения Barry MBE-2Kwx, Barry MBE-2Kxwx		Предназначен для крепления составных частей кровати и принадлежностей. Состав: болт М6×80 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., болт М8×60 (для колесных стоек) – 4 шт., болт М6×20 (для механизма регулировки наклона спинной секций) – 12 шт., винт М6×40 (для механизма регулировки наклона ножной секций) – 8 шт., гайка М6 (для крепления боковых ограждений) – 6 шт., гайка М8 (самоконтрящаяся) – 8 шт., шайба $\varnothing 8$мм (для боковых ограждений) – 6 шт., втулка $\varnothing 25 \times \varnothing 10 \times 25$мм (полимерная) – 8 шт., угловой крепеж 80×2×60мм (для изголовья и изножья) – 4 шт.
Принадлежности:		

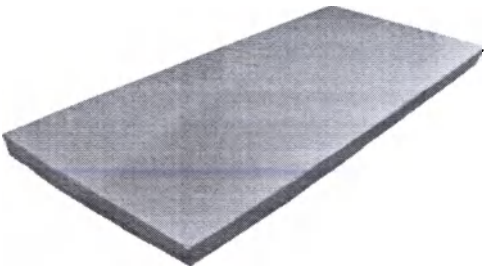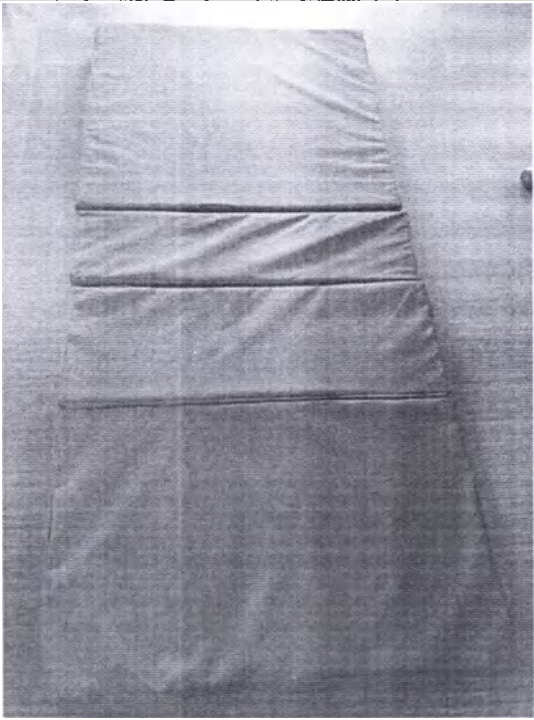Чехол водонепроницаемый Для всех исполнений. Поставляется при необходимости.		Чехол для изготовлен из водонепроницаемой ткани и предназначен для предотвращения попадания на матрац различных жидкостей и влаги. Габаритный размер, (Д×Ш×В), не более мм: Для основания типа S: 2060×850×85 Для основания типа В: 2060×950×85 Для основания типа L: 2060×850×85 Для основания типа U: 2060×950×85 Вес чехла для оснований типов S, В, L, U, не более кг: 4 кг.
Чехол водонепроницаемый секционный Для всех исполнений, кроме Barry MBE-2Kwx, Barry MBE-2Kxwx Поставляется при необходимости.		Чехол для изготовлен из водонепроницаемой ткани и предназначен для предотвращения попадания на матрац различных жидкостей и влаги. Габаритный размер, (Д×Ш×В), не более мм: Для основания типа S: 2060×850×85 Для основания типа В: 2060×950×85 Для основания типа L: 2060×850×85 Для основания типа U: 2060×950×85 Вес чехла для оснований типов S, В, L, U, не более: 4 кг.

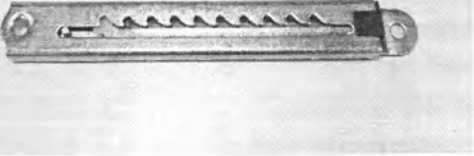Чехол на подушку секционную. Для исполнений: Barry MBE-2Lxx, Barry MBE-2Lxxx, Barry MBE-3Uxx, Barry MBE-3Uxxx (исключая модификации Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx) Поставляется при необходимости.		Чехол на подушку секционную многоразового использования, односегментная, разработанная для размещения на основании для кроватного матраца с целью обеспечения комфортной поверхности, при основании кровати типа L и U для неподвижной ножной секции. Габаритный размер, (Д×Ш×В), не более мм: Для основания типа L: 220×850×85 Для основания типа U: 220×950×85 Вес чехла для оснований типов L, U, не более кг: 0,2 кг.
Чехол водонепроницаемый секционный (кардио) Для исполнения: Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx Поставляется при необходимости.		Чехол для изготовлен из водонепроницаемой ткани и предназначен для предотвращения попадания на матрац различных жидкостей и влаги. Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более в мм: 2060×850×85 Вес чехла, не более: 4 кг.
Растомат Для всех исполнений, кроме Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx Поставляется при необходимости.		Предназначен для фиксации положения ножной секции при изменении угла наклона. Габаритные размеры Д×Ш×В, в мм: 240×30×13 Вес, кг: 0,3 Регулировка угла наклона 9 позиций с шагом 6°. 9 позиций: 0°, 6°, 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 42°, 48°. Максимальная нагрузка на устройство, не более: 180 кг

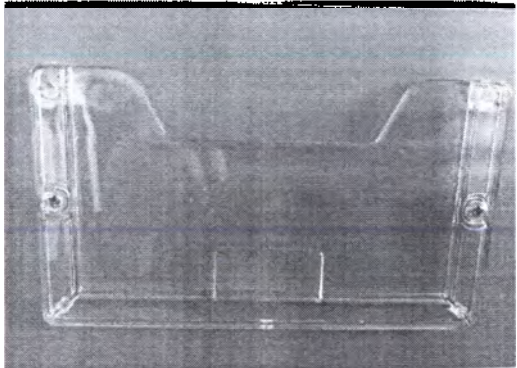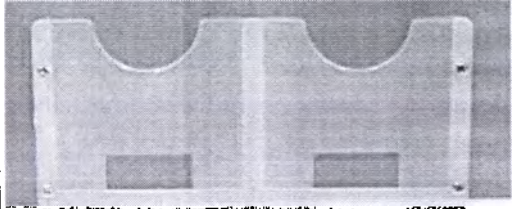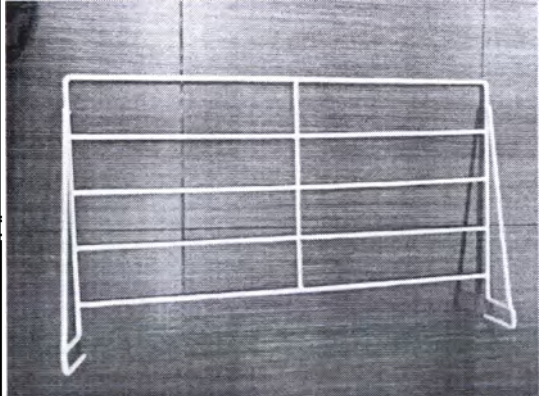Держатель документов на один карман Для всех исполнений Поставляется при необходимости.		Предназначен для размещения информационных записей, касающихся пациента. Габаритные размеры Д×Ш×В, не более в мм: 140×5×80 Вес не более кг: 0,15 Максимальная нагрузка на устройство, не более: 0,01 кг
Держатель документов на два кармана Для всех исполнений Поставляется при необходимости.		Предназначен для размещения информационных записей, касающихся пациента. Габаритные размеры Д×Ш×В, не более, в мм: 165×5×80 Вес, не более, кг: 0,15 Максимальная нагрузка на устройство, не более: 0,01 кг
Держатель принадлежностей Для всех исполнений Поставляется при необходимости.		Предназначен для размещения принадлежностей, необходимых для пациента Габаритные размеры Д×Ш×В, в мм: 630×390×74 Вес, в кг: 1,2 Максимальная нагрузка, не более кг: 5

Столик сервисный Для всех вариантов исполнений. Поставляется при необходимости.		Вспомогательное устройство для приема пищи пациентом. Столик устанавливается на поднятые боковые ограждения и может передвигаться по всей их длине. Габаритные размеры столика Д×Ш×В, в мм: 970×350×30 Вес, в кг: 2,6 Предельная рабочая равномерно распределенная нагрузка, не более кг: 8
--	---	--

7. Техническая спецификация

7.1 Основные технические характеристики

Все составные части, а также элементы управления, основные и опциональные принадлежности, а также общая конструкция «Кровать медицинская функциональная электрическая Вагу с принадлежностями» изготавливается в соответствии с выходными эксплуатационными характеристиками с учетом предельных отклонений линейных размеров по ГОСТ 30893.1-2002 «Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками» класс точности - Очень грубый (v).

7.1.1 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-2Spp, Barry MBE-2Lpp, Barry MBE-2Sps, Barry MBE-2Lps, Barry MBE-2Scp, Barry MBE-2Lcp, Barry MBE-2Scs, Barry MBE-2Lcs



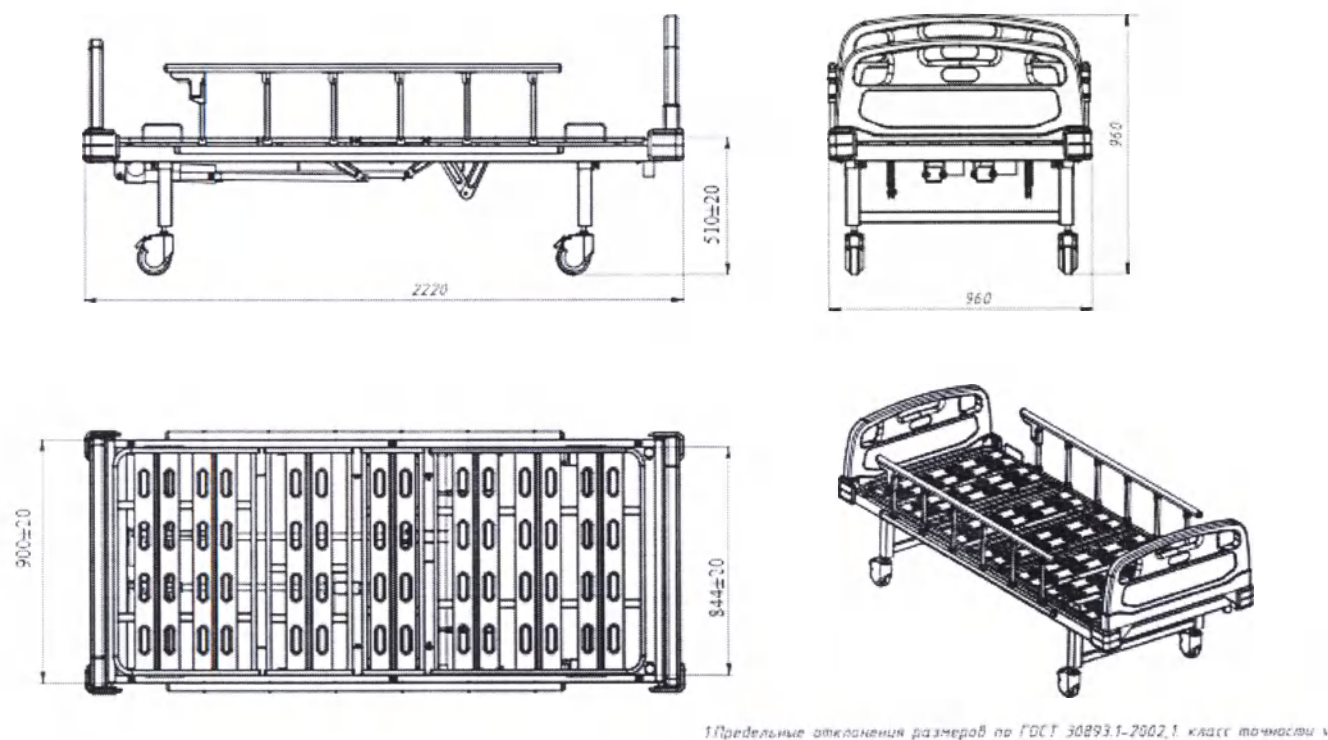


Рис. 1 Габаритные размеры Кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Spp

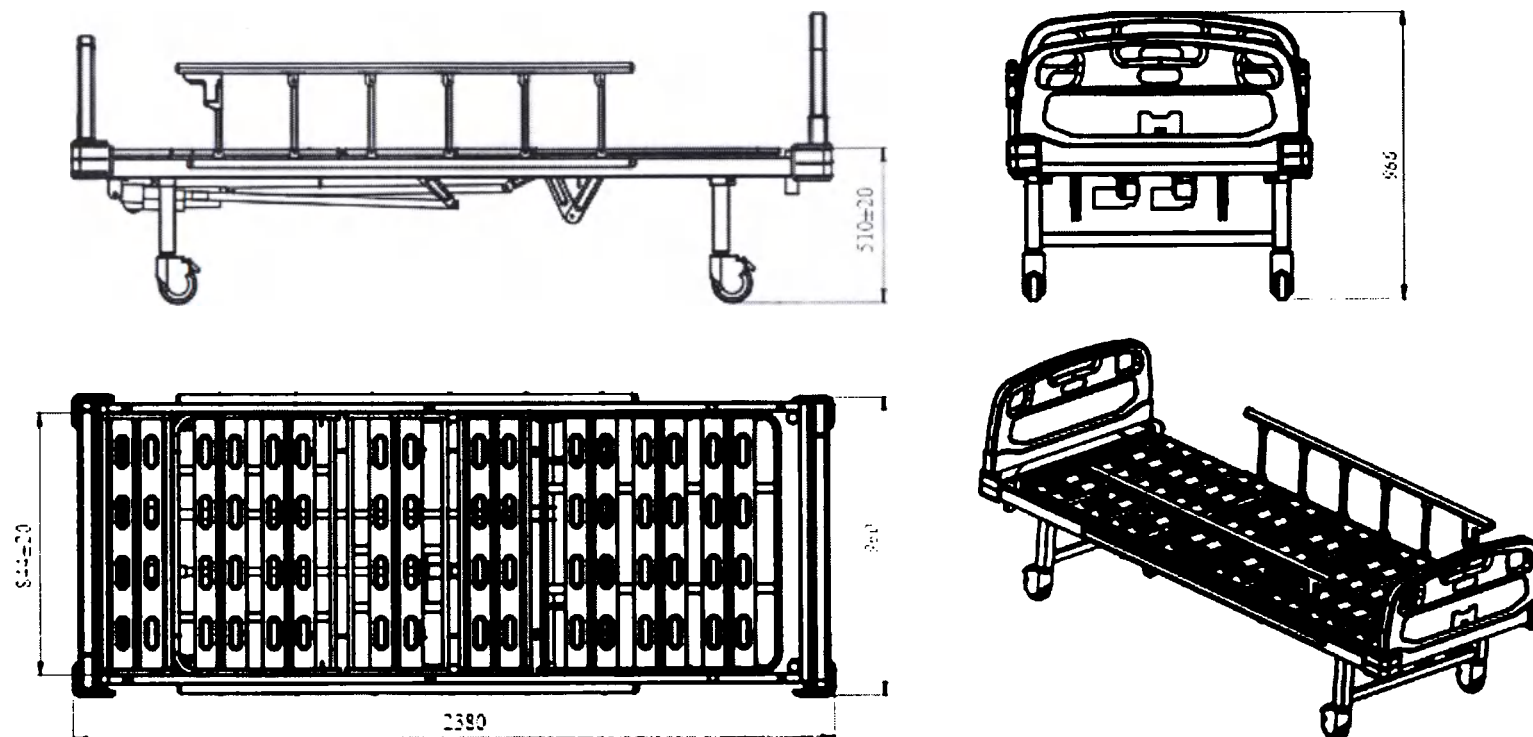


Предельные отклонения размеров по ГОСТ 308911-2002, 1 класс точности

Рис. 2 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Lpp

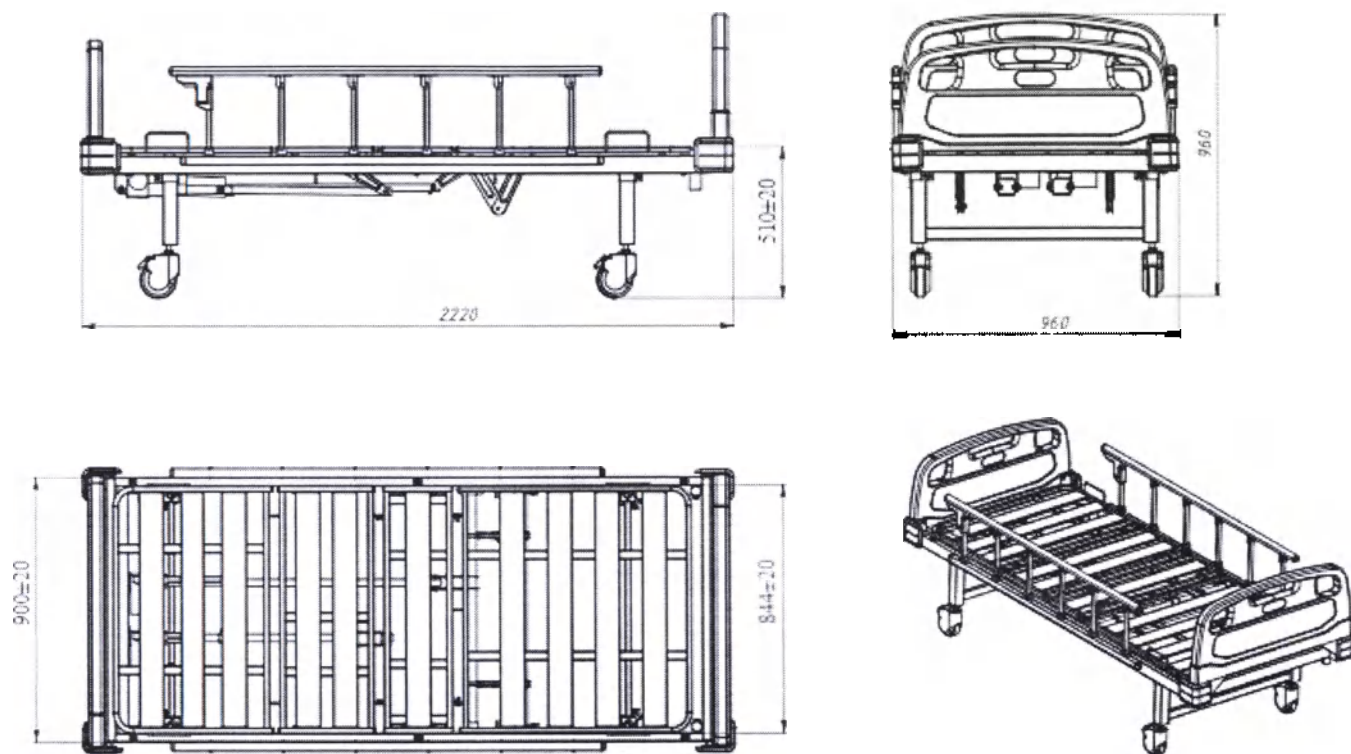

Габаритные значения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности 4

Рис. 3 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bangu, вариант исполнения Bangu MBE-2Sp

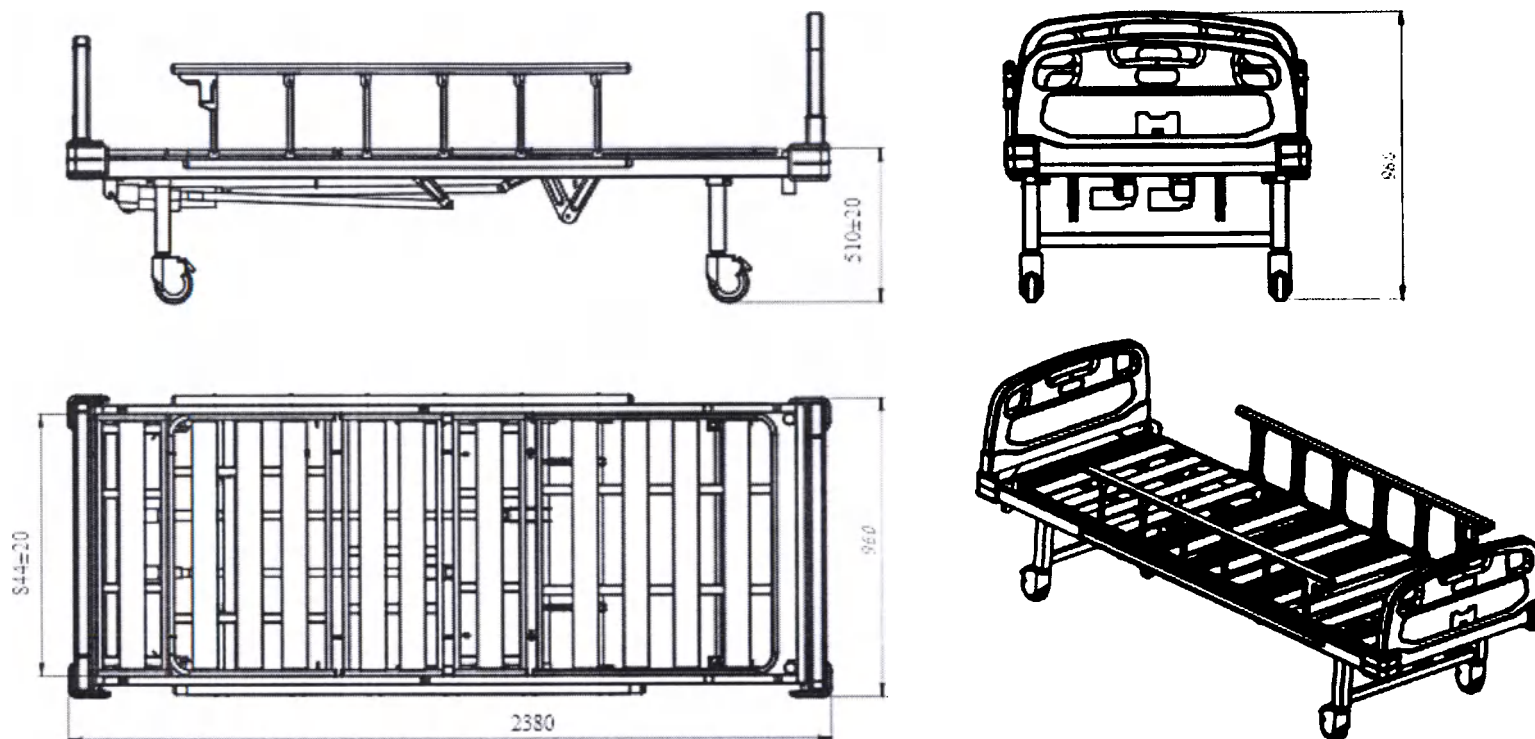

Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893-2002, 1 класс точности и

Рис. 4 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggu, вариант исполнения Baggu MBE-2Lrs



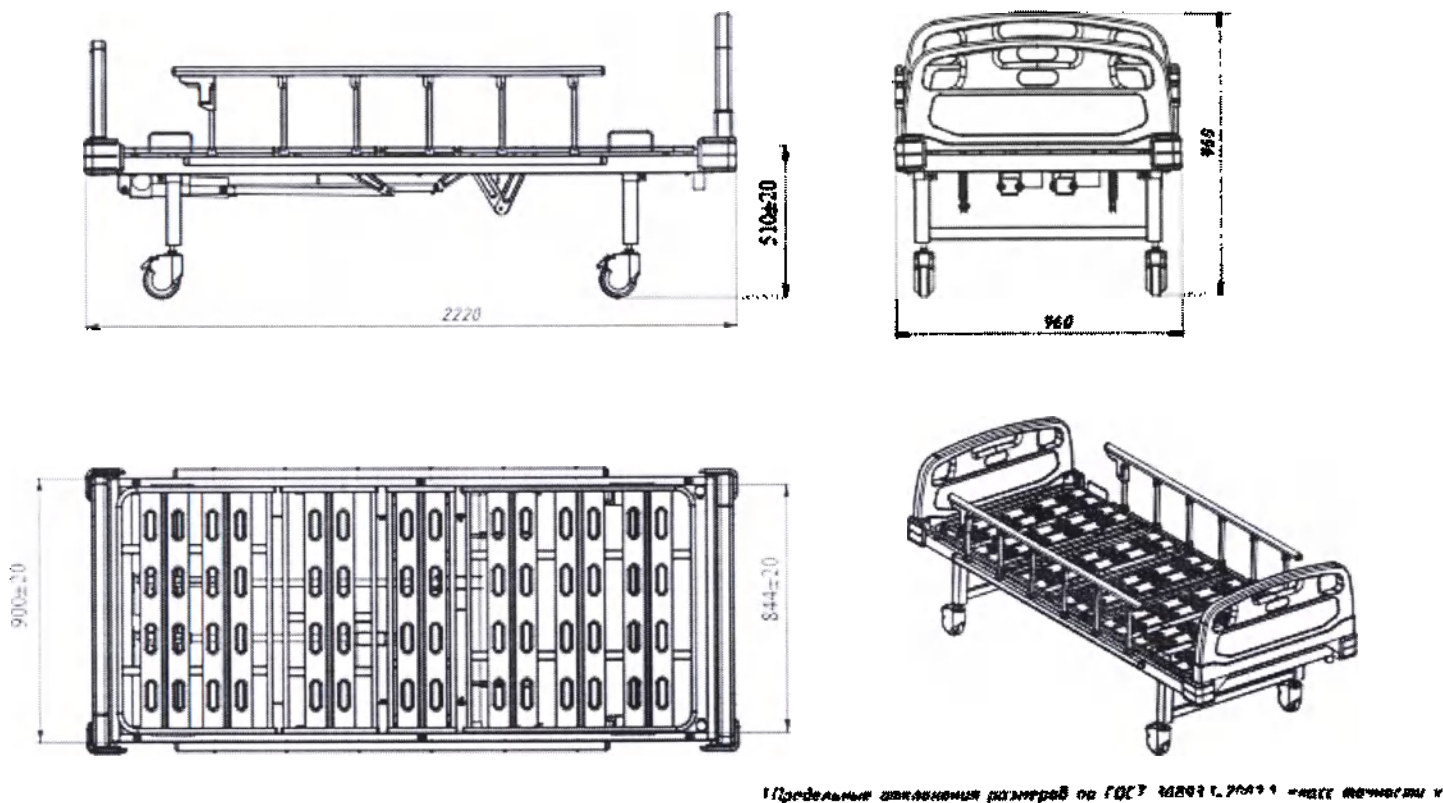


Рис. 5 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Scp

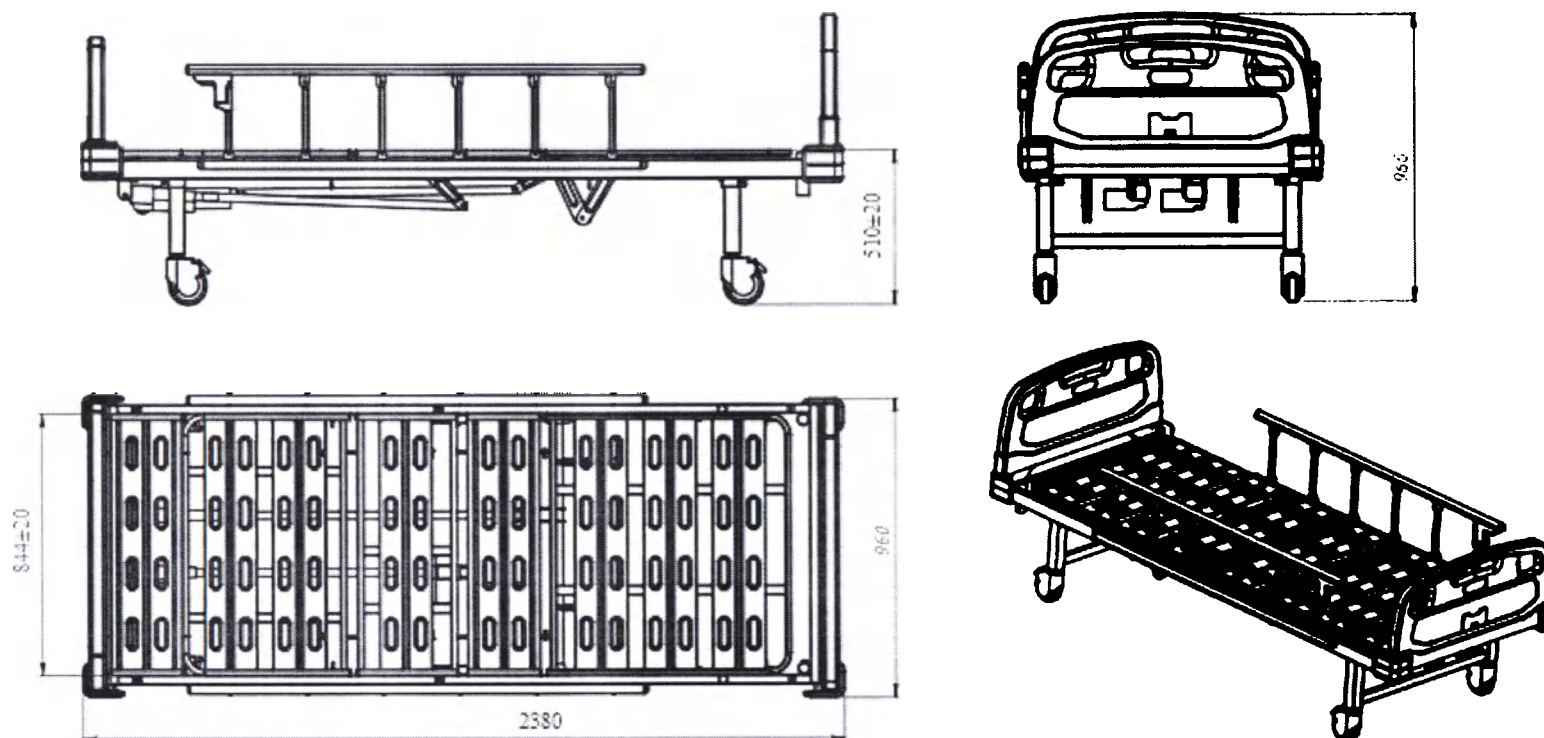


Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002.1 класс точности v

Рис. 6 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baгу, вариант исполнения Baгу MBE-2Lcp

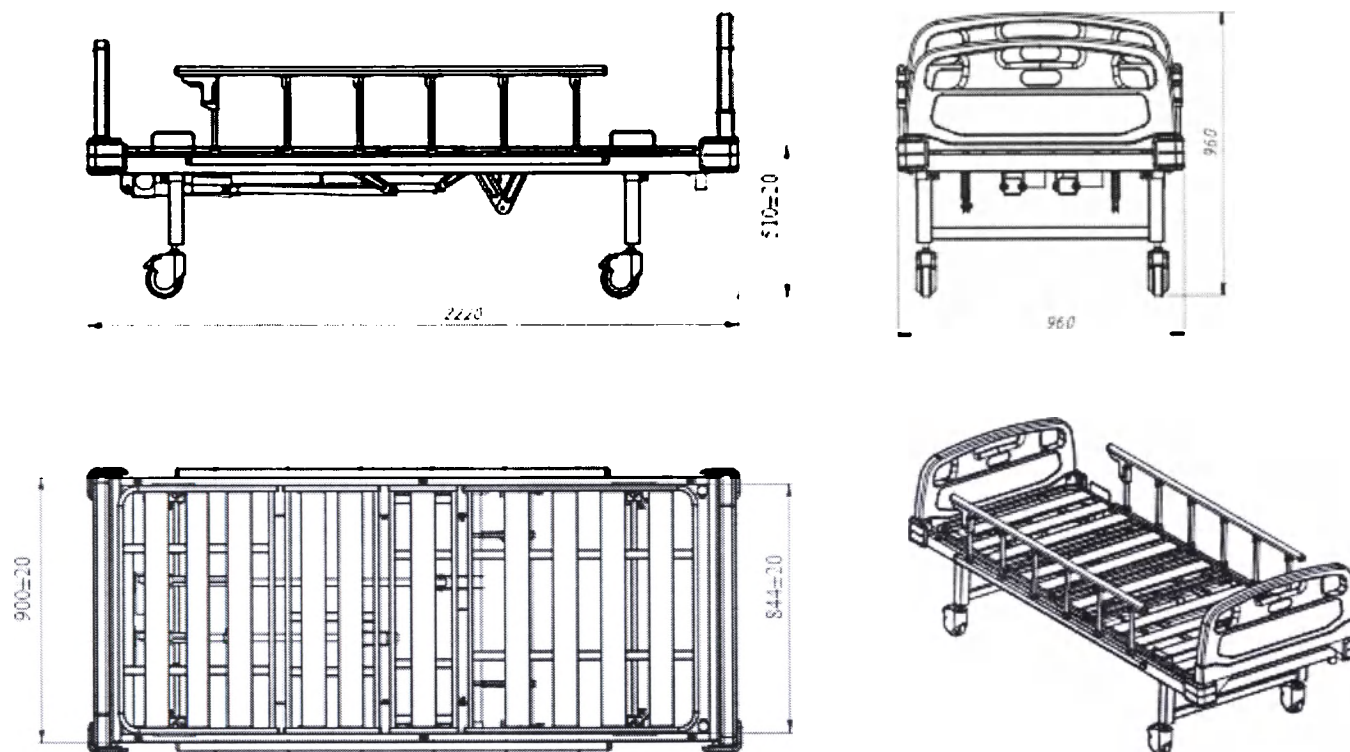

Габаритные значения размеров по ГОСТ 30893-1-2002 1 класс точности, мм


Рис. 7 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Scs

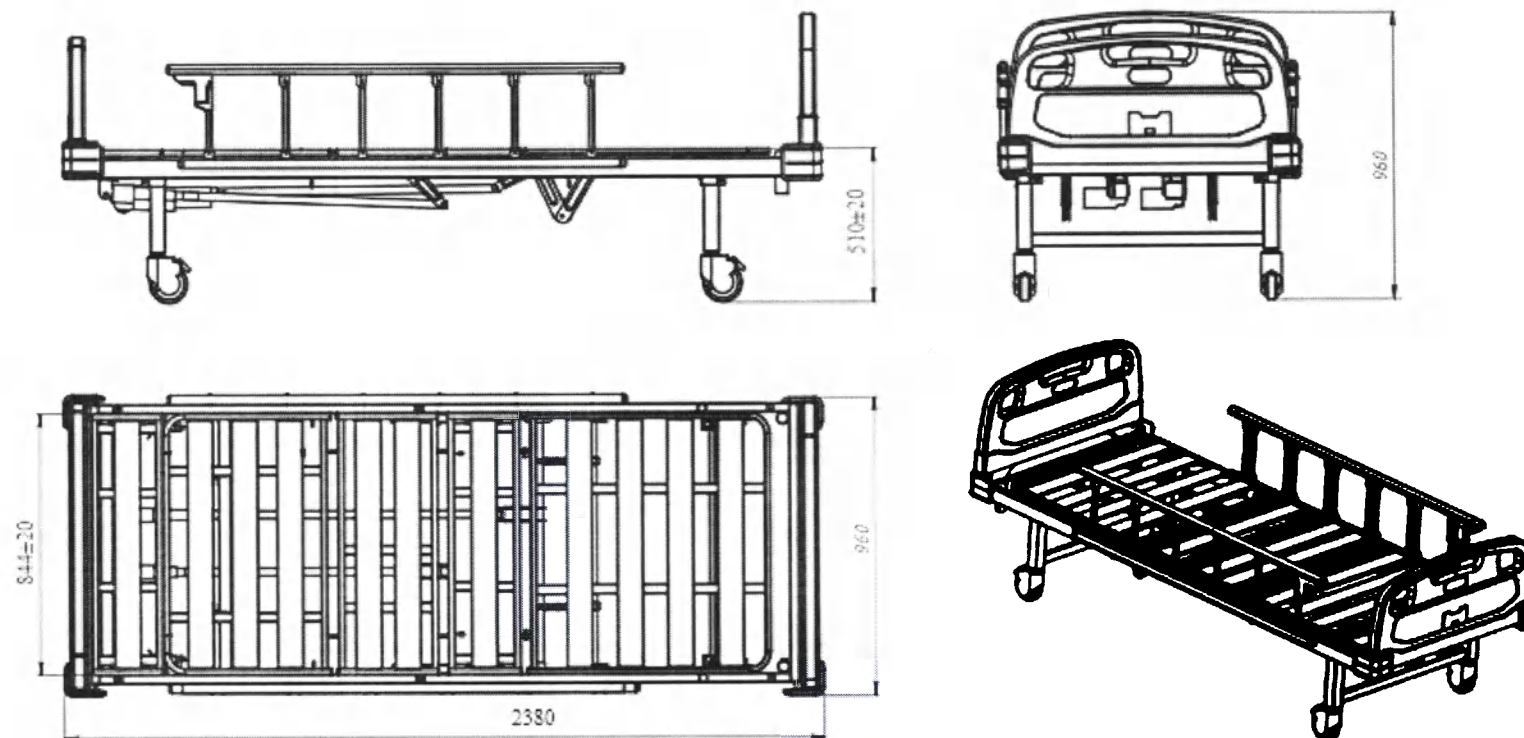

Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности v

Рис. 8 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Lcs

Характеристика	Значение	
Наименование модели	Barry MBE-2Spp, Barry MBE-2Sps, Barry MBE-2Scp, Barry MBE-2Scs	Barry MBE-2Lpp, Barry MBE-2Lps, Barry MBE-2Lcp, Barry MBE-2Lcs
Тип основания	S- стандартное	L - удлиненное
Высота от пола до матрасного основания кровати, (без учета высоты матраца), мм	510±20	510±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1980±20	2220±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	844±20	844±20
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	900±20
Высота с учетом изголовья, не более мм	960	960
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250

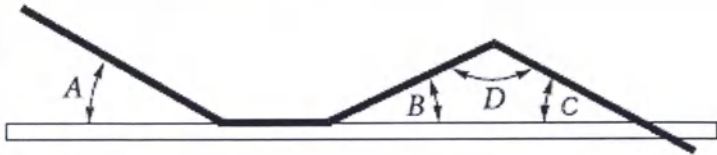Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	160	160
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	302	306
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	82	84
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	151	153
Энергопотребление, ВА, не более	260	260
Количество секций, шт.	4	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная	
Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция , В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция , С- Ножная секция)		

Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)	
Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)	
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)	
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)	
Тип управления углом наклона секций	Электропривод - пульт управления	
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный	
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	780×844×25
Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×844×25
Размер промежуточной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×844×25

Размер ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×844×25
Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	-	230×844×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%	
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ	
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4	
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B	
Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2220×960×960	2380×960×960
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	1950	1950

Вес (без съемных приспособлений), не более кг	61	65
Общая масса кровати, не более кг	66	70
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареи. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории AP или APG. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.		

7.1.2 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-2Swp, Barry MBE-2Bwp, Barry MBE-2Lwp, Barry MBE-2Uwp, Barry MBE-2Sws, Barry MBE-2Bws, Barry MBE-2Lws, Barry MBE-2Uws


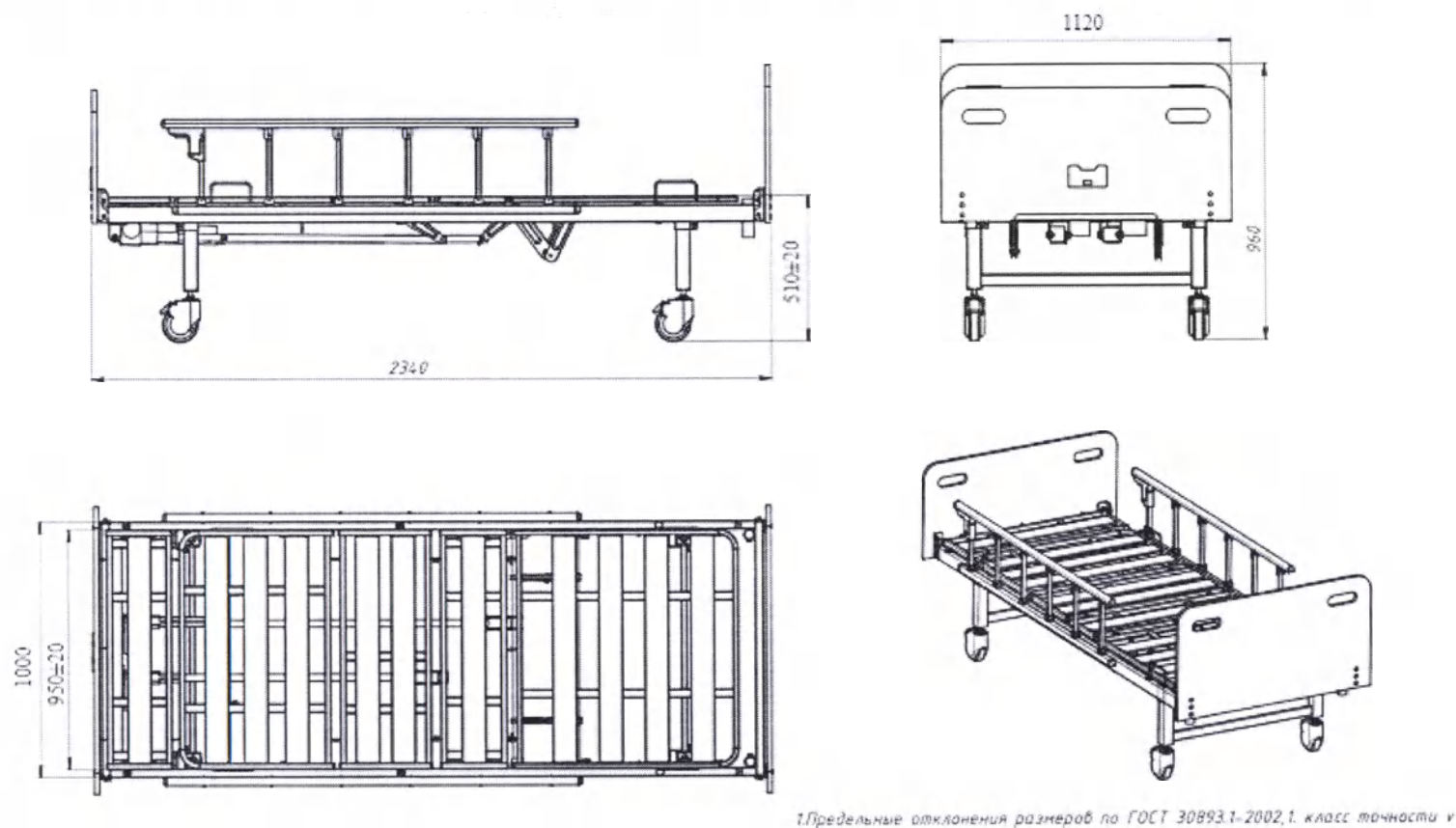


Рис. 9 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Uws

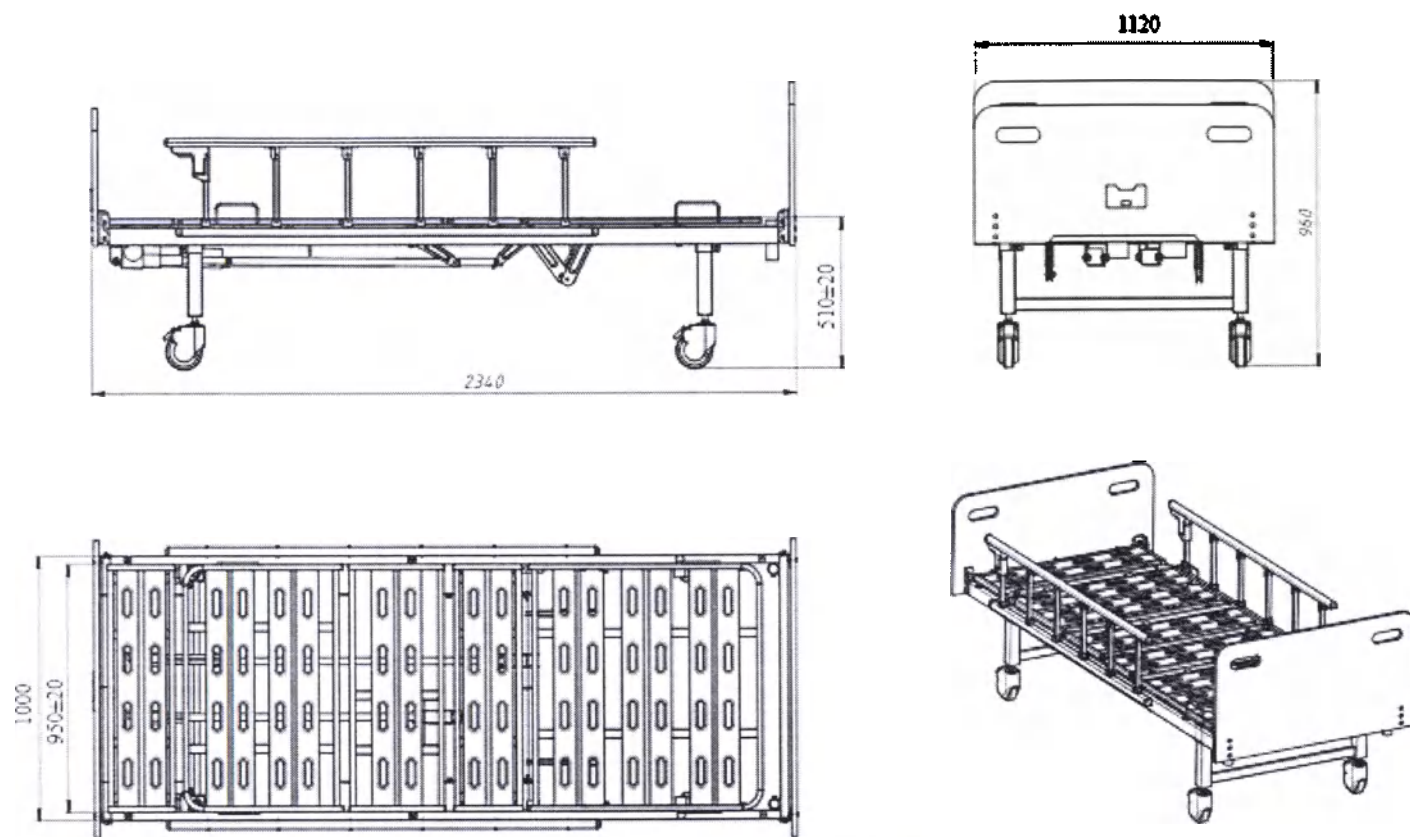

1.Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693-1-2002.1 «класс точности в

Рис. 10 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baгу, вариант исполнения Baгу MBE-2Uwp

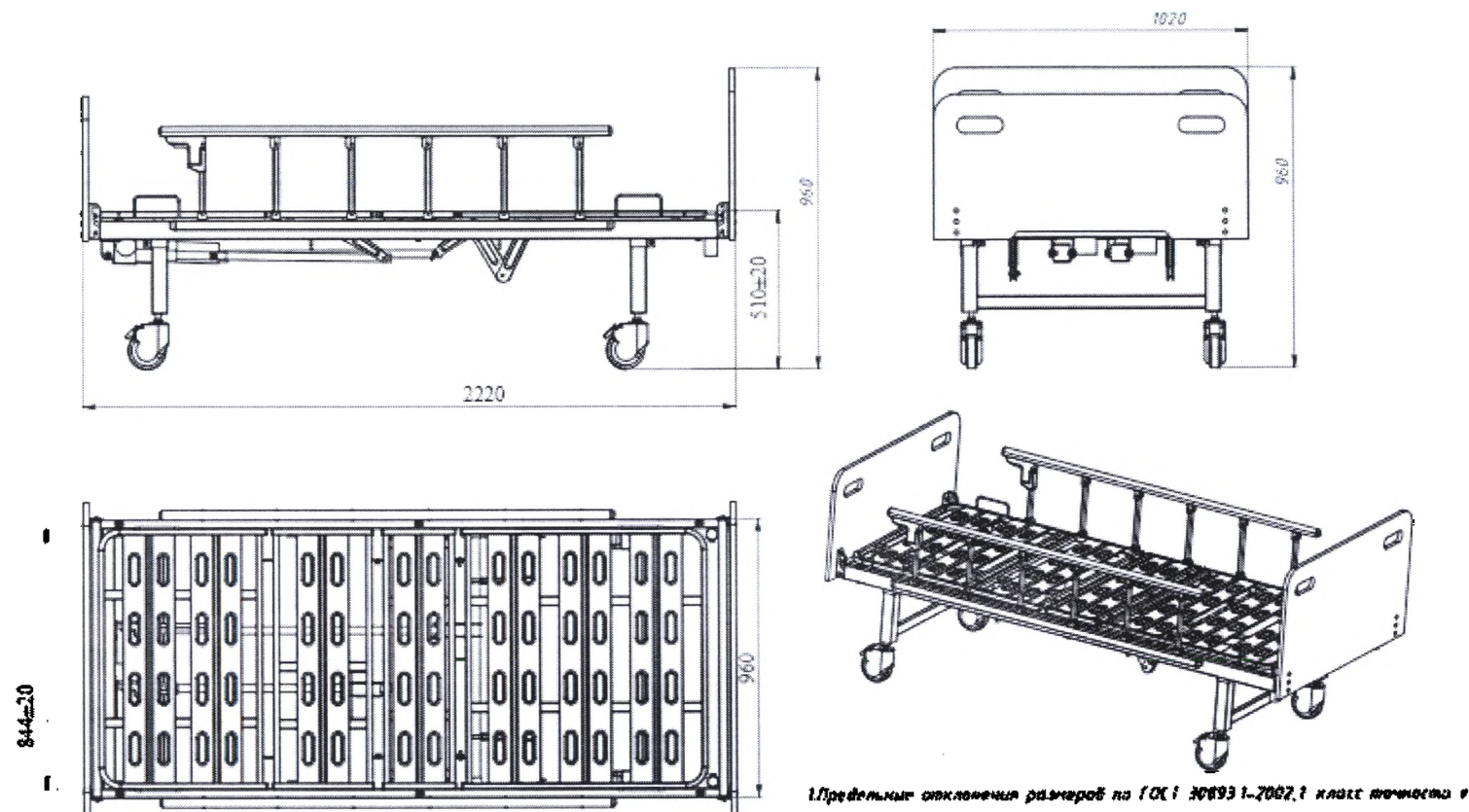


Рис. 11 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-2Swr


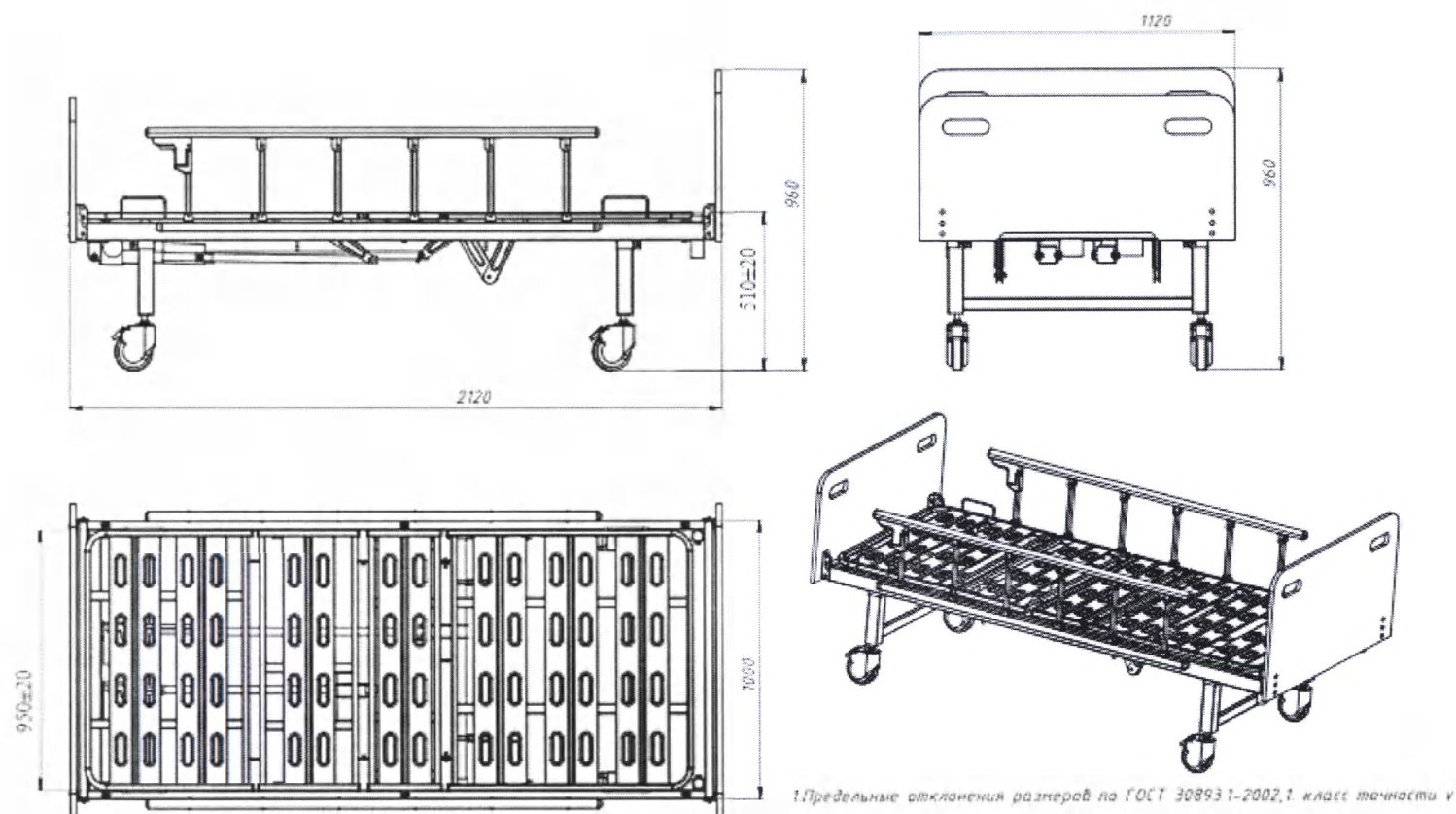


Рис. 12 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Bwp

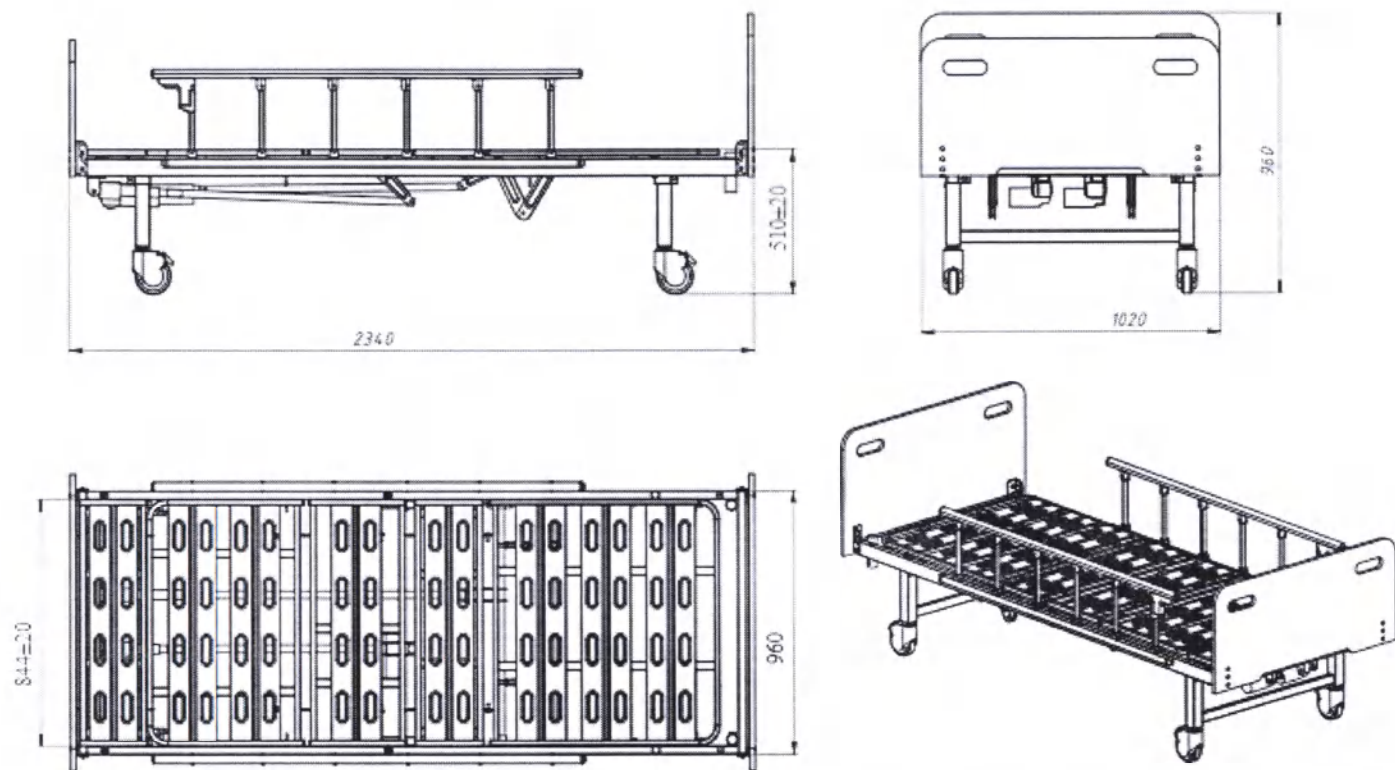

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1. класс точности и

Рис. 13 габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Lwp

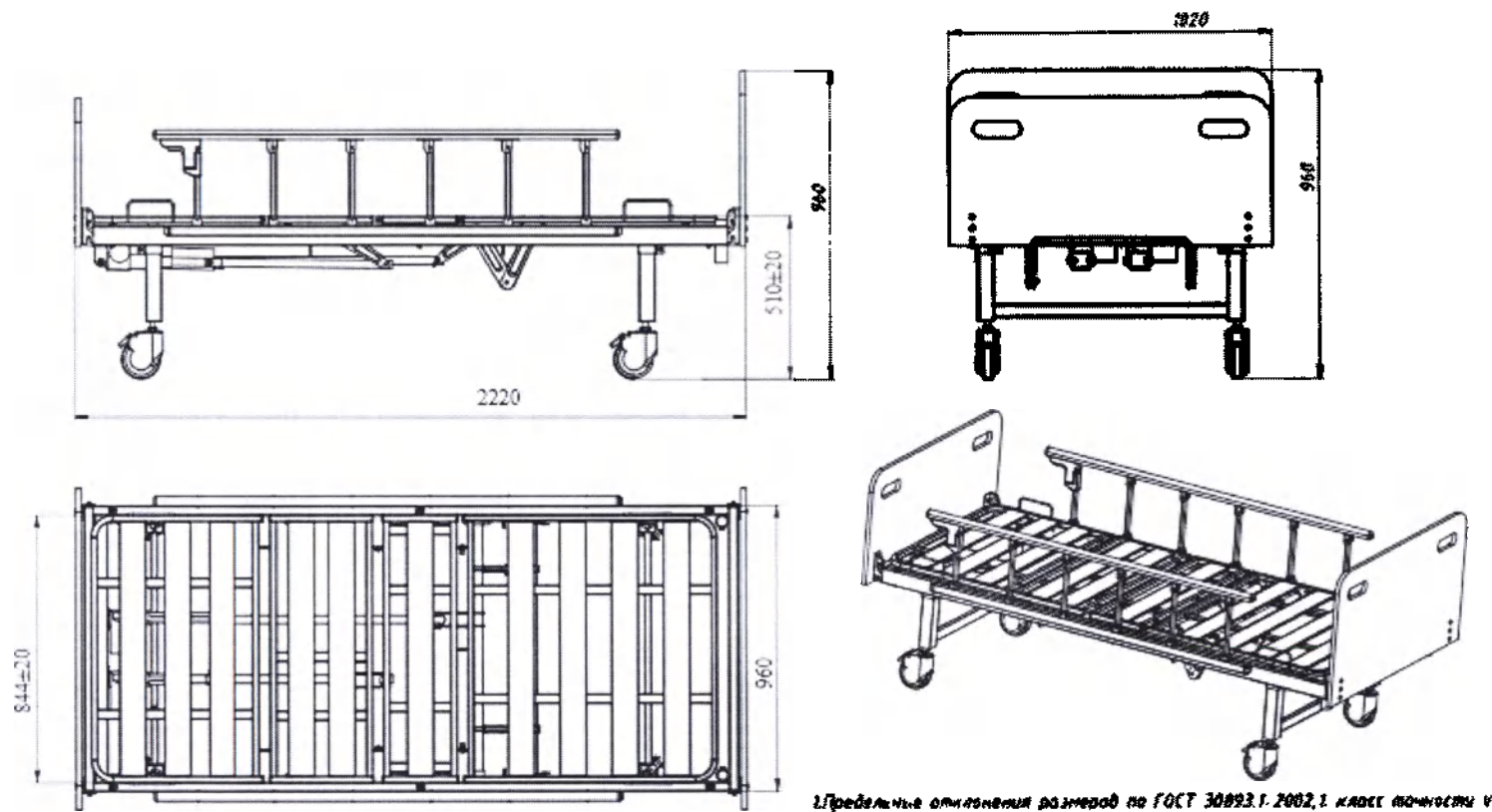


Рис. 14 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Sws


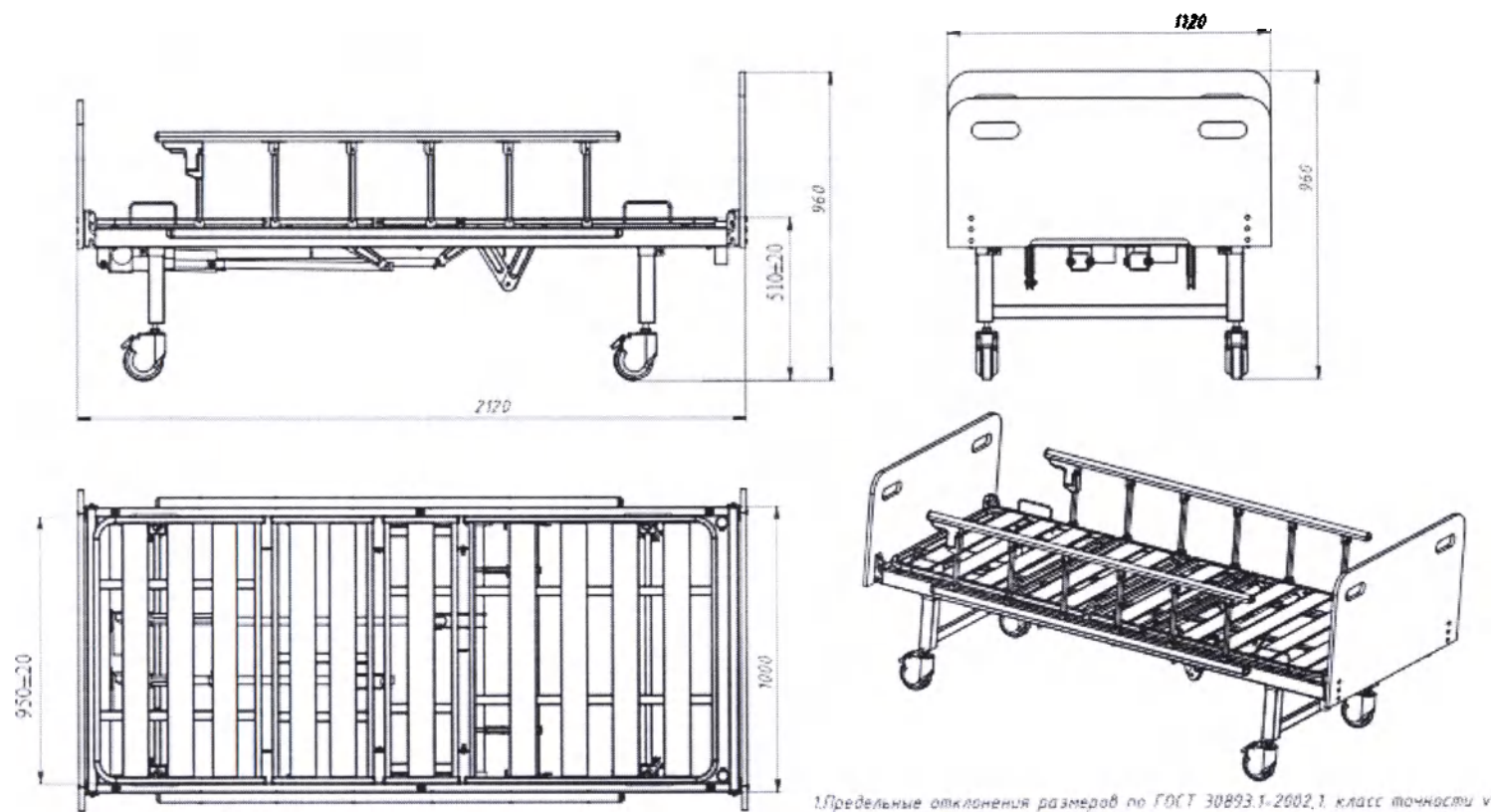


Рис. 15 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-2Bwz

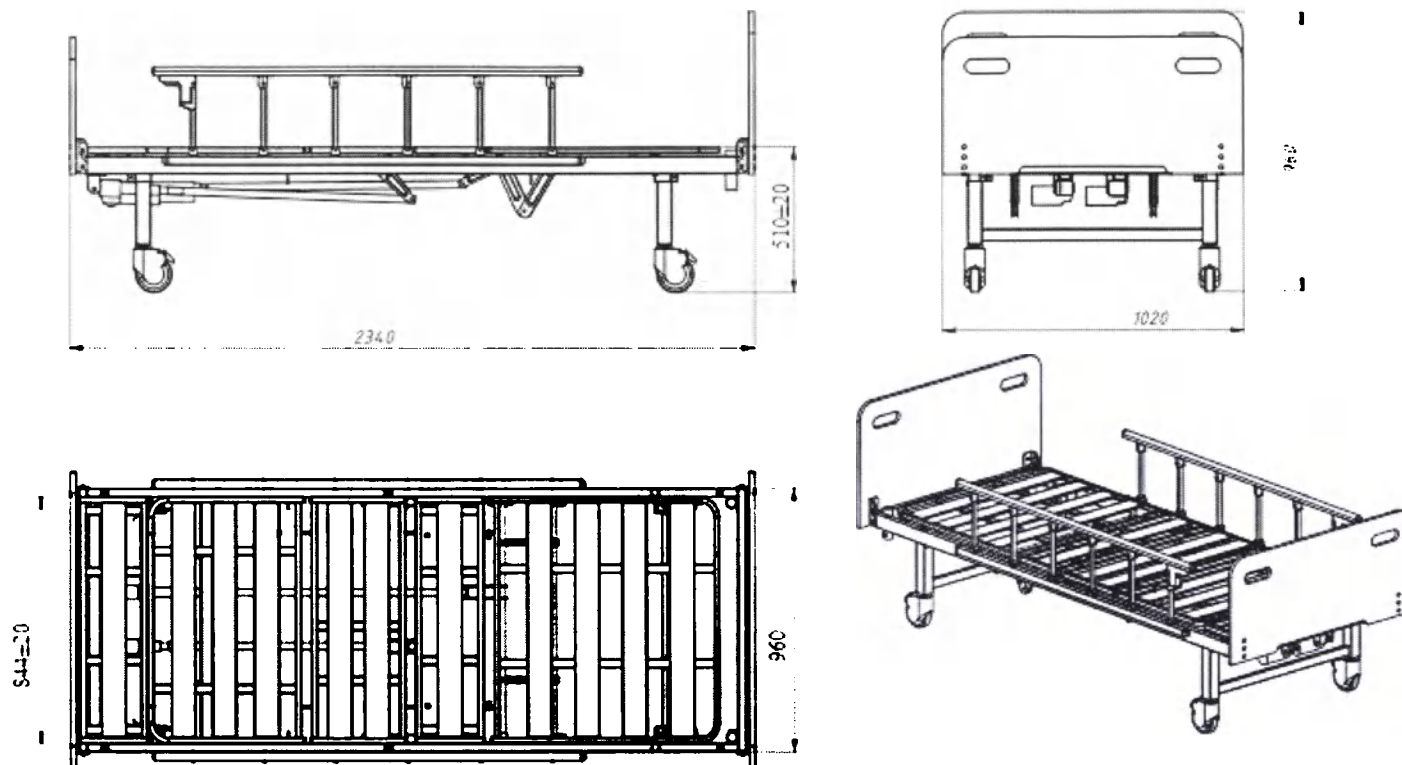


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, I класс точности.

Рис. 16 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bary, вариант исполнения Bary MBE-2Lws

Характеристика	Значение			
Наименование модели	Barry MBE-2Swp Barry MBE-2Sws	Barry MBE-2Bwp, Barry MBE-2Bws	Barry MBE-2Lwp, Barry MBE-2Lws	Barry MBE-2Uwp, Barry MBE-2Uws
Тип основания	S - стандартное	B - широкое	L - удлиненное	U - универсальное
Высота от пола до матрацного основания кровати, (без учета высоты матраца), мм	510±20	510±20	510±20	510±20
Длина матрацного основания кровати, мм	1980±20	1980±20	2220±20	2220±20
Ширина матрацного основания кровати, мм	844±20	950±20	844±20	950±20
Ширина матрацного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	1000±20	900±20	1000±20
Высота с учетом изголовья, не более мм	960	960	960	960
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250

Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	178	182	182	186
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	316	320	320	324
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	85	85	85	85
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	158	160	160	160
Энергопотребление, ВА, не более	260	260	260	260
Количество секций, шт.	4	4	5	5

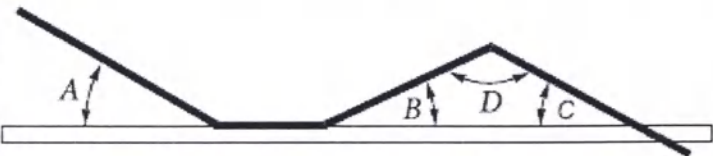Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная
Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)	 The diagram illustrates a mechanical structure with four adjustable sections labeled A, B, D, and C. Section A is the back section, B is the hip section, D is the intermediate section, and C is the leg section. Arrows indicate the range of motion for each section.
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)
Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)
Тип управления углом наклона секций	Электропривод - пульт управления

Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный			
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	785×950×25	780×844×25	785×950×25
Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×950×25	230×844×25	230×950×25
Размер промежуточной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×950×25	320×844×25	320×950×25
Размер ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×950×25	540×844×25	540×950×25
Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	-	-	230×844×25	230×950×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70	70	70

Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%			
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ			
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4			
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B			
Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2220×1020×960	2120×1120×960	2340×1020×960	2340×1120×960
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	1950	1950	1950	1950
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	75	80	80	85

Общая масса кровати, не более кг	80	85	85	90
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории AP или APG. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.				

7.1.3 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-2Smpp, Barry MBE-2Bmpp, Barry MBE-2Lmpp, Barry MBE-2Umpp, Barry MBE-2Smps, Barry MBE-2Bmps, Barry MBE-2Lmps, Barry MBE-2Umps



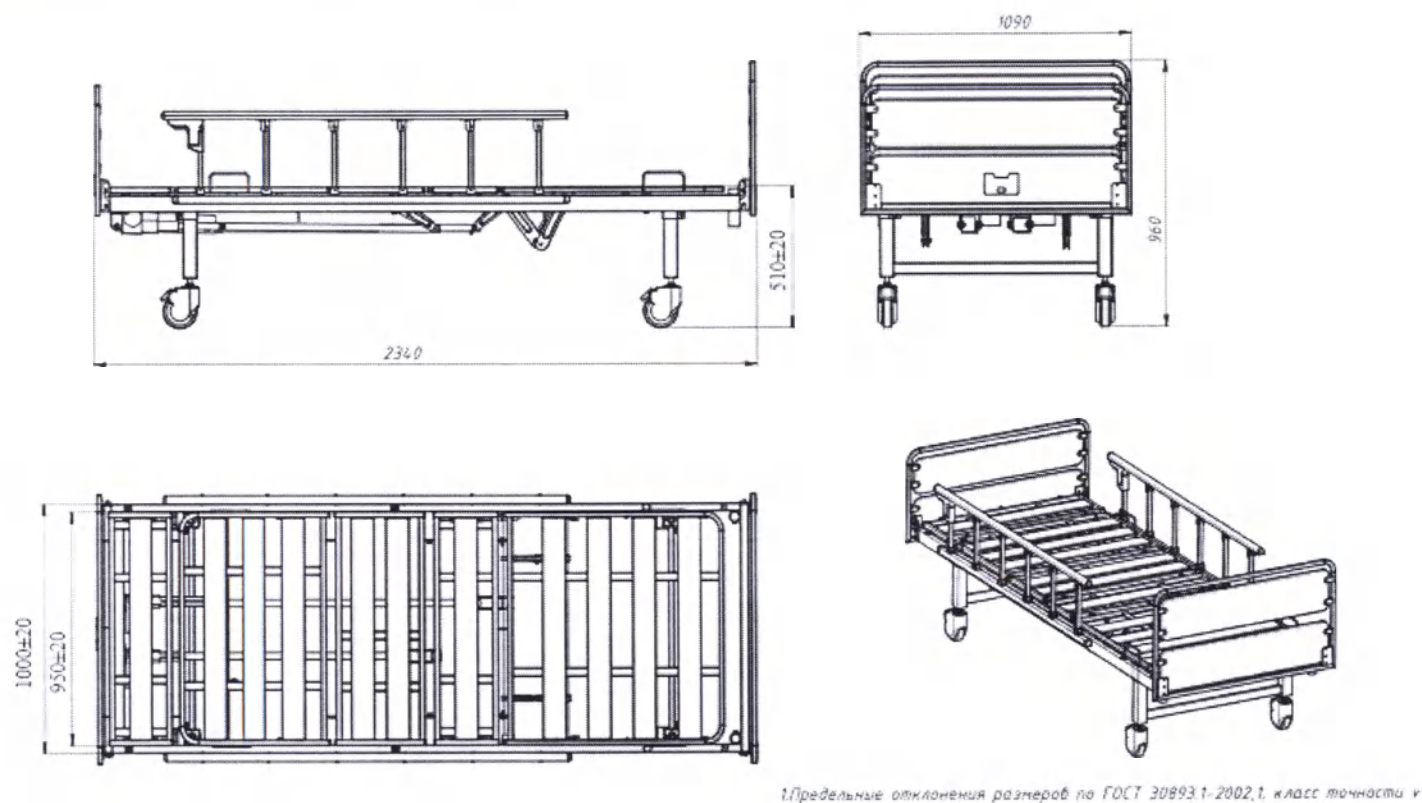


Рис. 17 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Umps

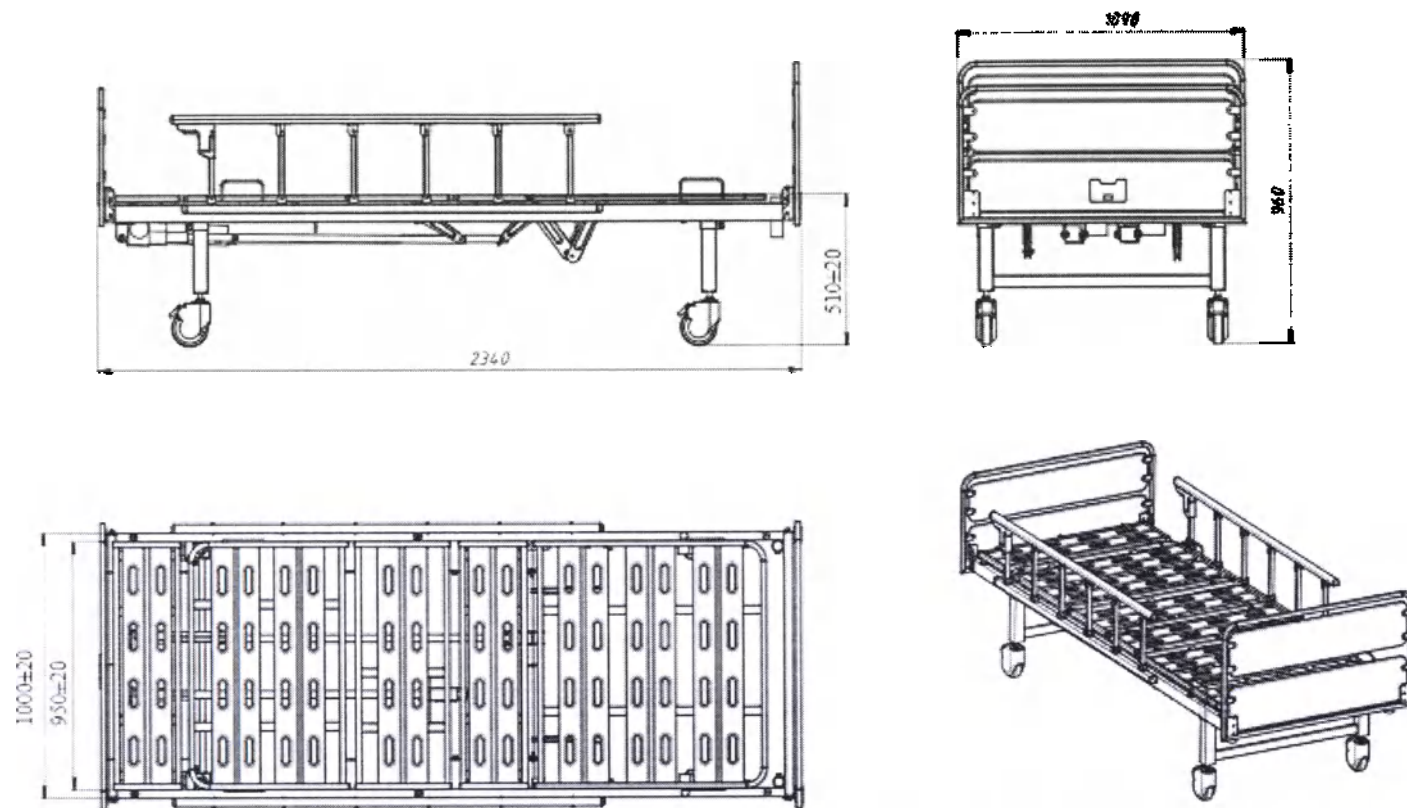


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1. класс точности и

Рис. 18 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Байту, вариант исполнения Байту МВЕ-2Ump

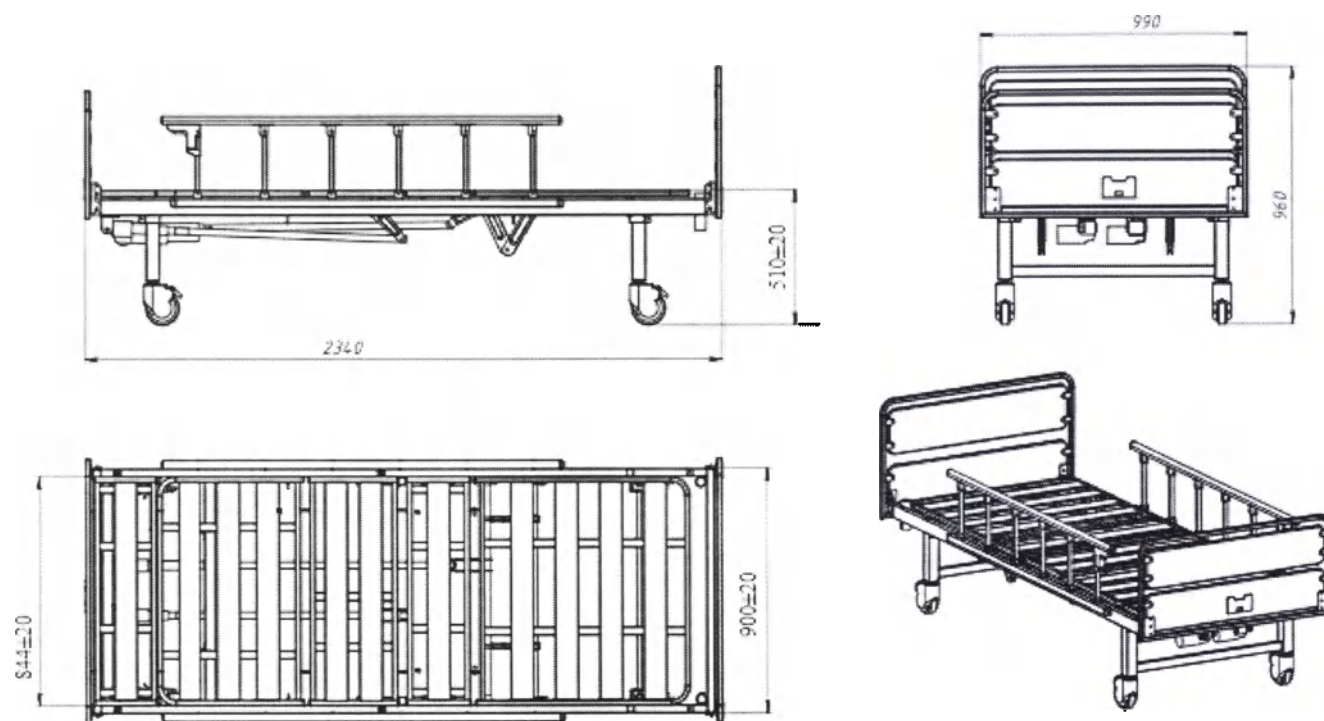


1.Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002,1 класс точности *

Рис. 19 габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Lmp

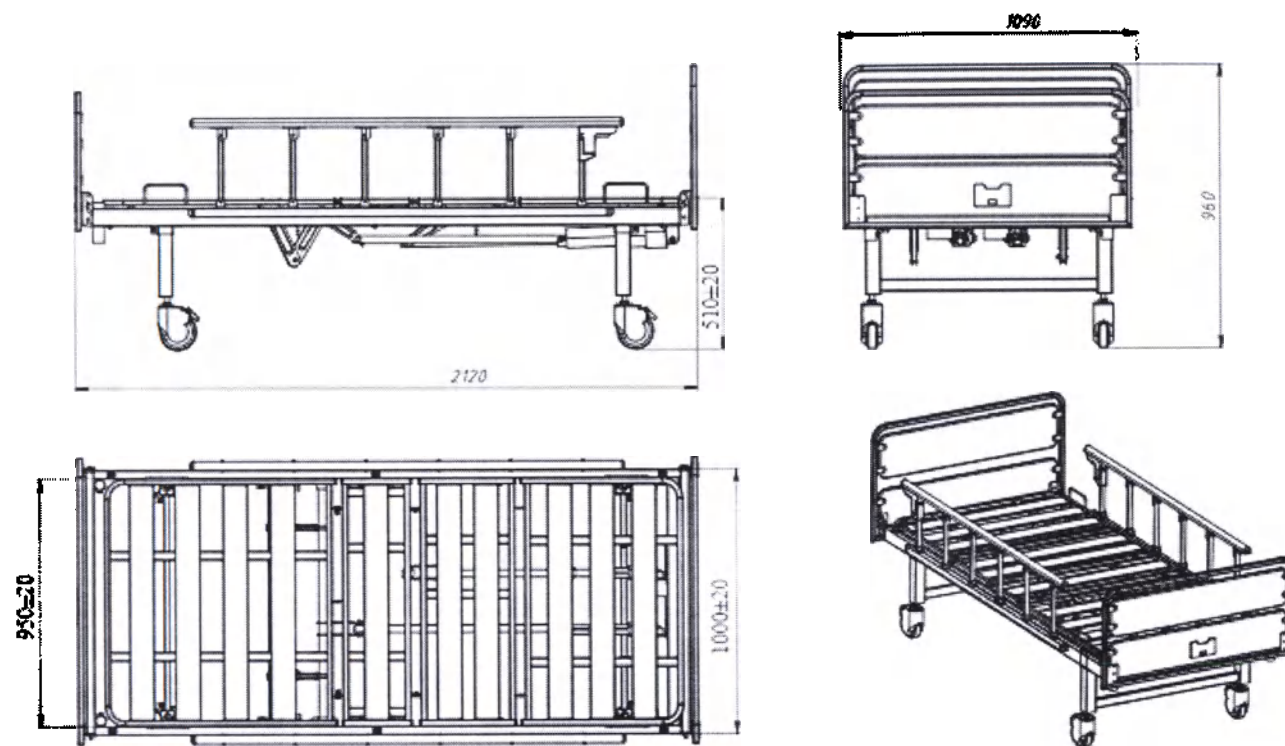


1.Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности

Рис. 20 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Вагу, вариант исполнения Вагу МВЕ-2Вмрз

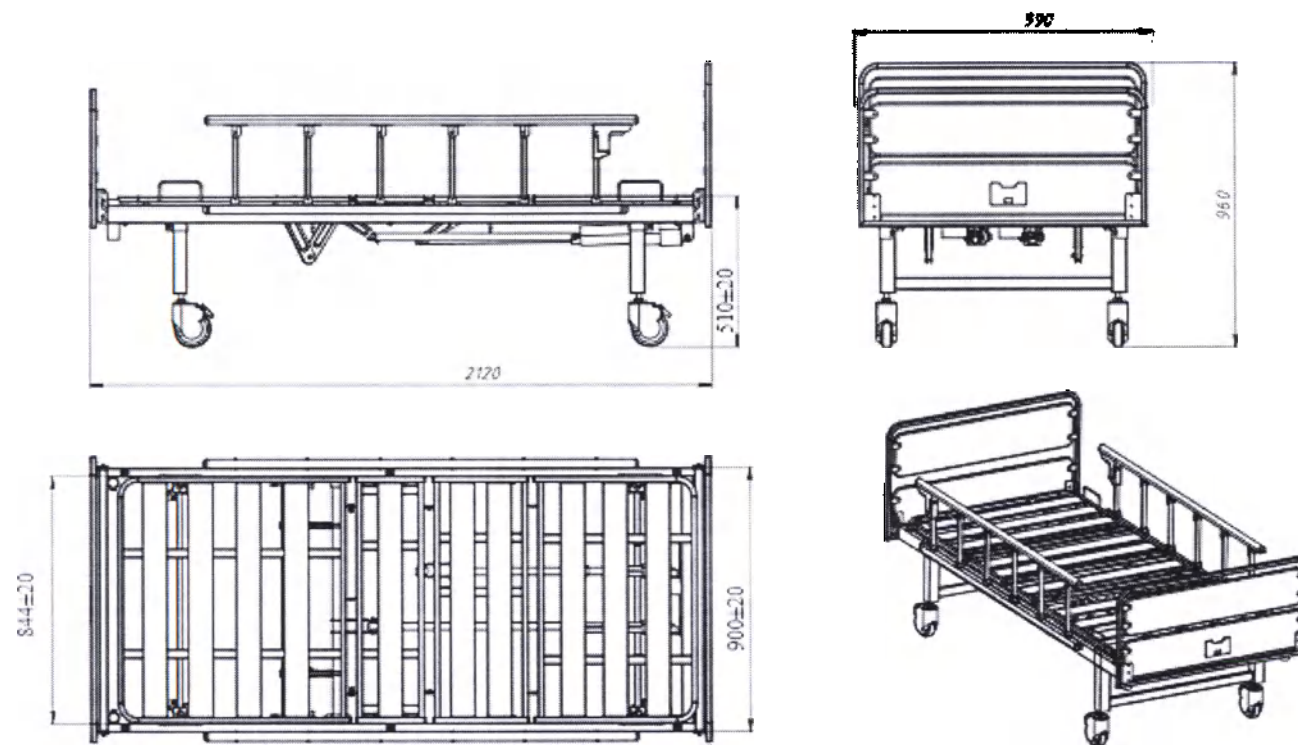


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности в

Рис. 21 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Вагу, вариант исполнения Вагу MBE-2Smpz

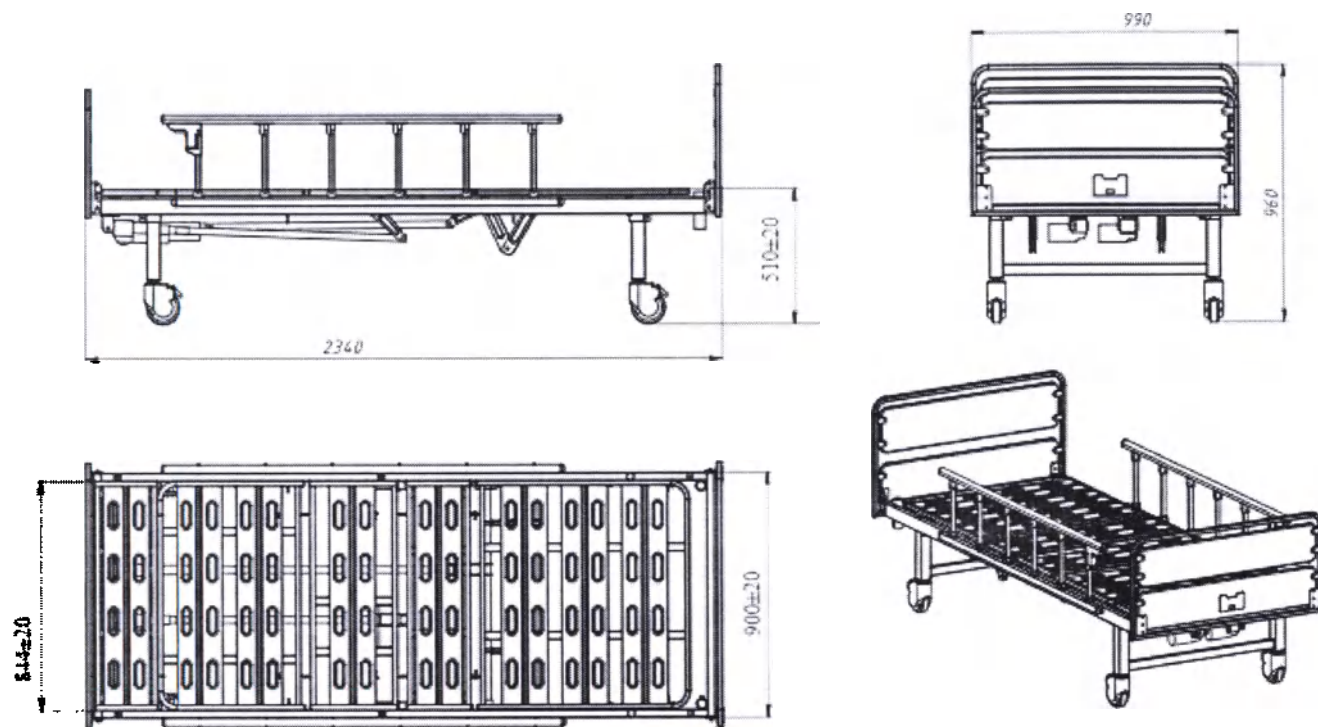


Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, 1 класс точности

Рис. 22 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggu, вариант исполнения Baggu MBE-2Lmp

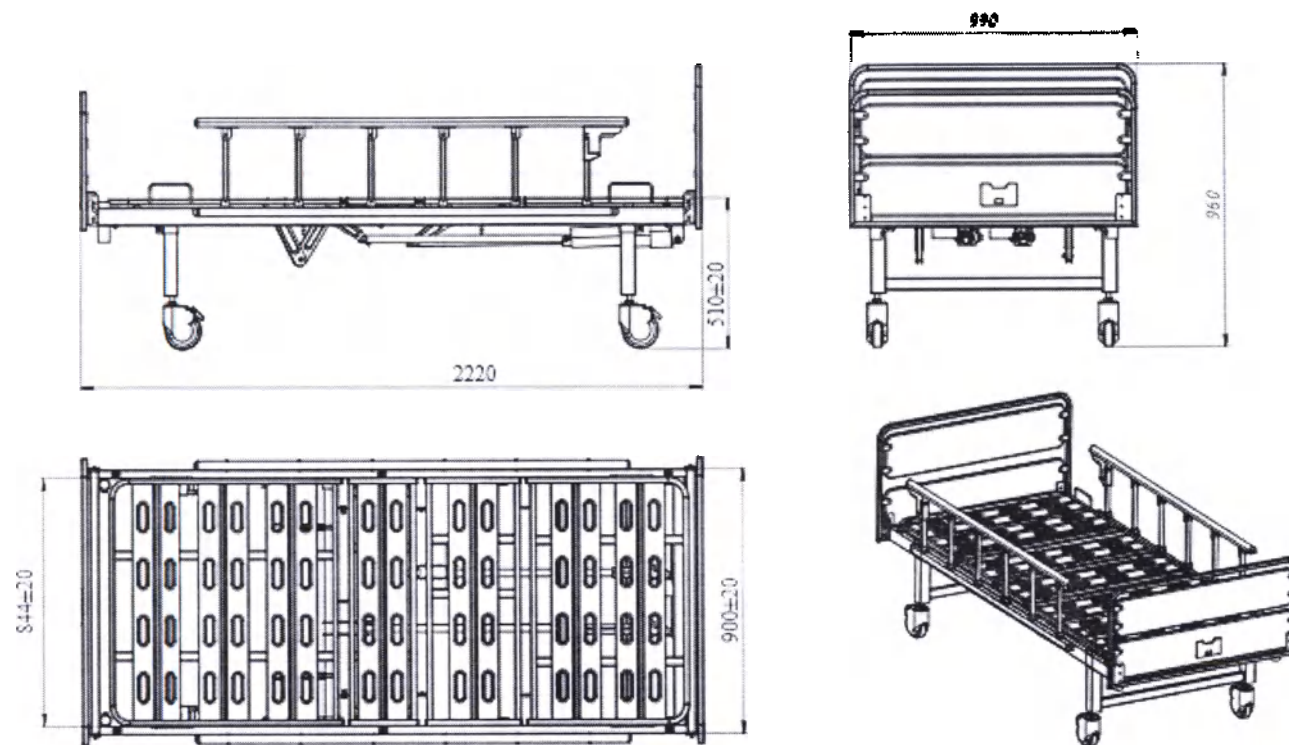

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1. «класс точности»

Рис. 23 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Smpp

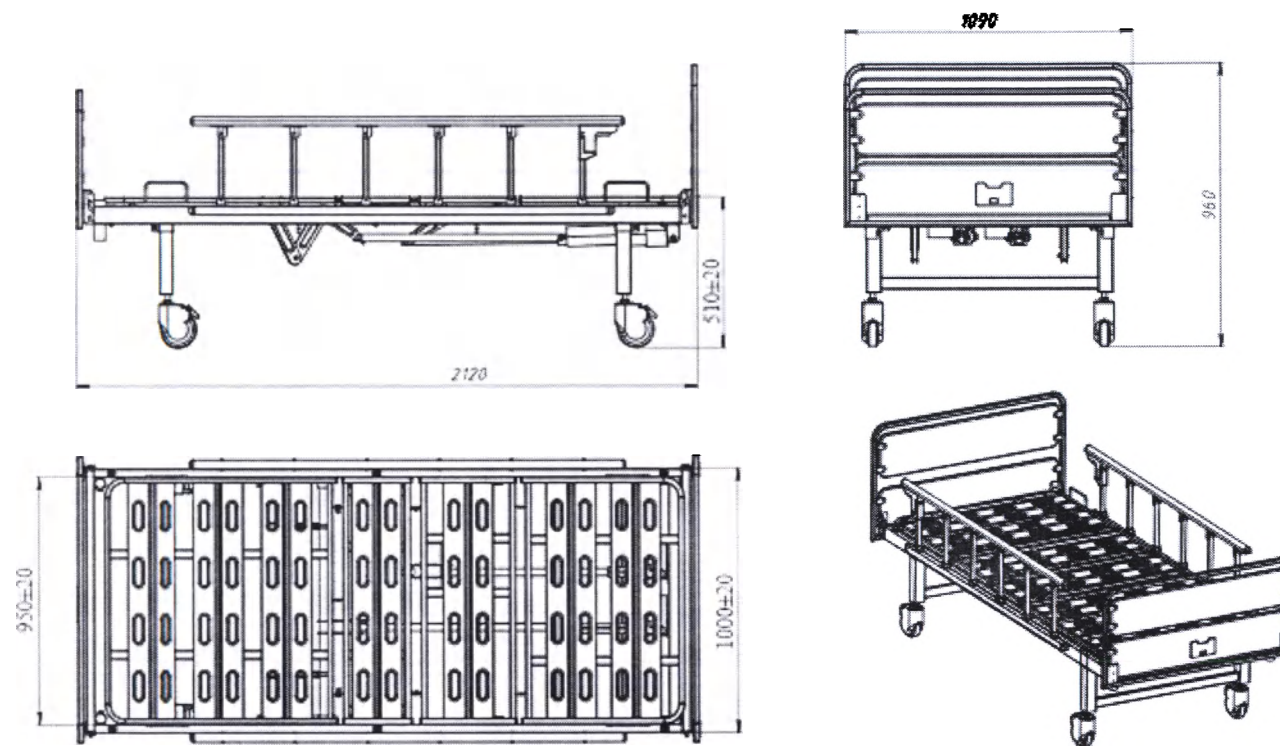

Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности v

Рис. 24 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Вагу, вариант исполнения Вагу МВЕ-2Вмрр

Характеристика	Значение			
Наименование модели	Barry MBE-2Smpp, Barry MBE-2Smps	Barry MBE-2Bmpp, Barry MBE-2Bmps	Barry MBE-2Lmpp, Barry MBE-2Lmps	Barry MBE-2Umpp Barry MBE-2Umps
Тип основания	S - стандартное	B - широкое	L - удлиненное	U – универсальное
Высота от пола до матрасного основания кровати, (без учета высоты матраса), мм	510±20	510±20	510±20	510±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1980±20	1980±20	2220±20	2220±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	844±20	950±20	844±20	950±20
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	1000±20	900±20	1000±20
Высота с учетом изголовья, не более мм	960	960	960	960
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250
Максимальное усилие перемещения с	166	170	170	174


заблокированными тормозами, Н				
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	304	308	308	402
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	83	85	85	85
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	152	154	154	160
Энергопотребление, ВА, не более	260	260	260	260
Количество секций, шт.	4	4	5	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная			

Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)				
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)			
Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)			
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)			
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)			
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления			
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный			
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	785×950×25	780×844×25	785×950×25

Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×950×25	230×844×25	230×950×25
Размер промежуточной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×950×25	320×844×25	320×950×25
Размер ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×950×25	540×844×25	540×950×25
Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	-	-	230×844×25	230×950×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%			
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ			
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4			


Защита от поражения электрическим током	класс I тип B			
Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2220×990×960	2120×1090×960	2340×990×960	2340×1090×960
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	1950	1950	1950	1950
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	63	67	67	72
Общая масса кровати, не более кг	68	72	72	77
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории AP или APG. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.				

7.1.4 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-2Smwp, Barry MBE-2Bmwp, Barry MBE-2Lmwp, Barry MBE-2Umwp, Barry MBE-2Smws, Barry MBE-2Bmws, Barry MBE-2Lmws, Barry MBE-2Umws

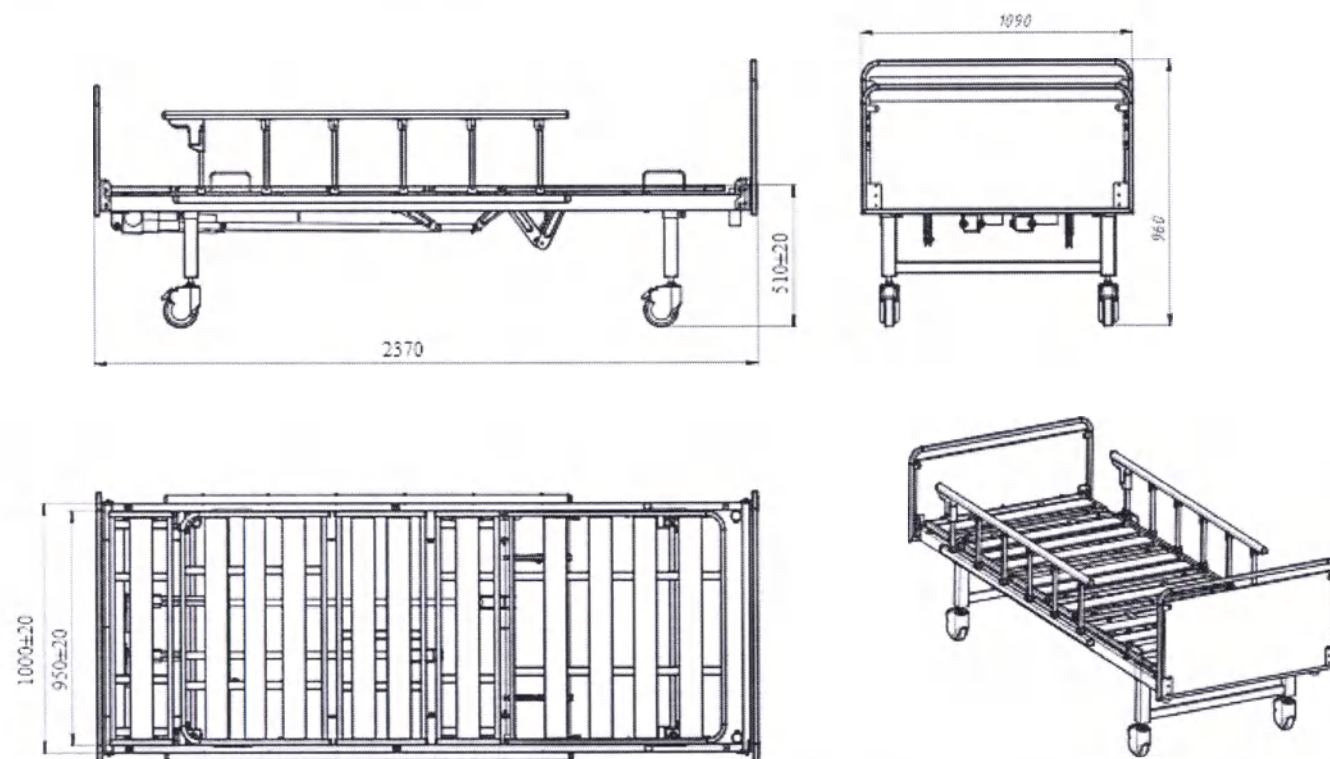

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности и

Рис. 25 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Umws

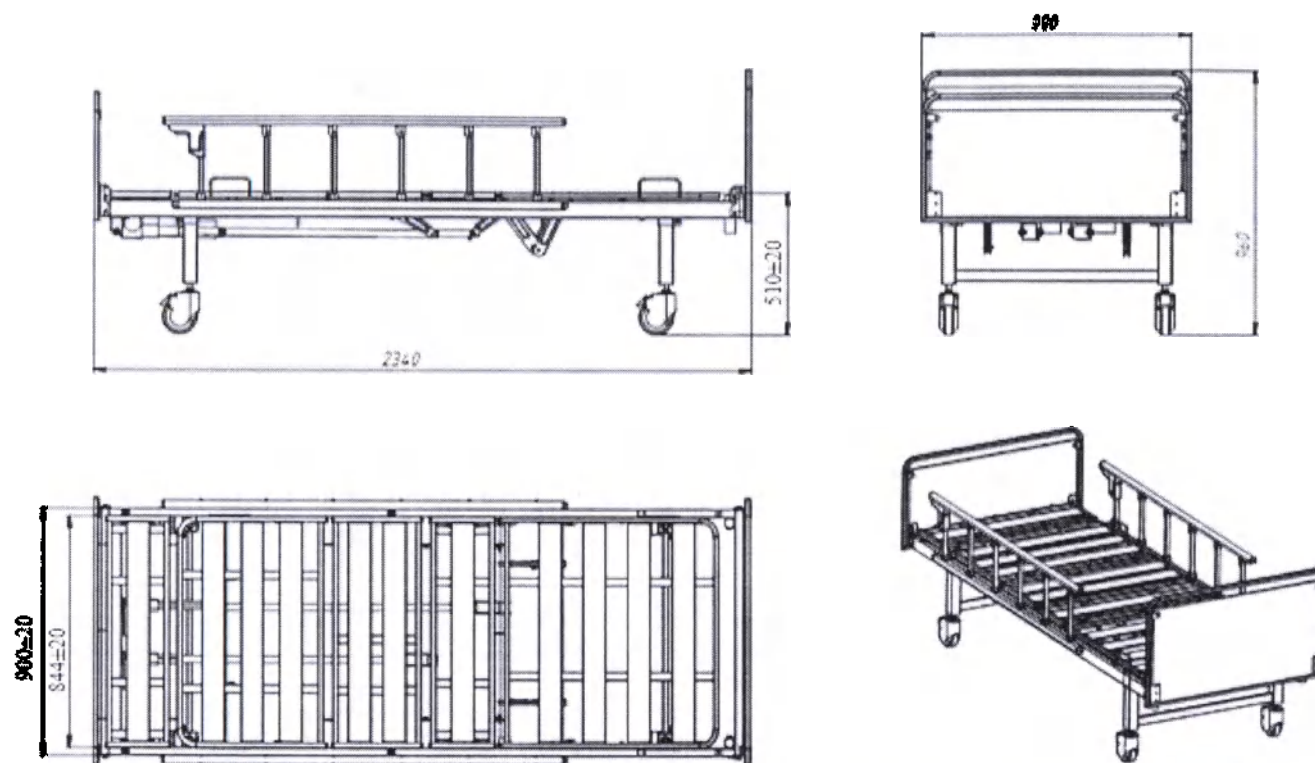

1/Габаритные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности γ

Рис. 26 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-2Lmws

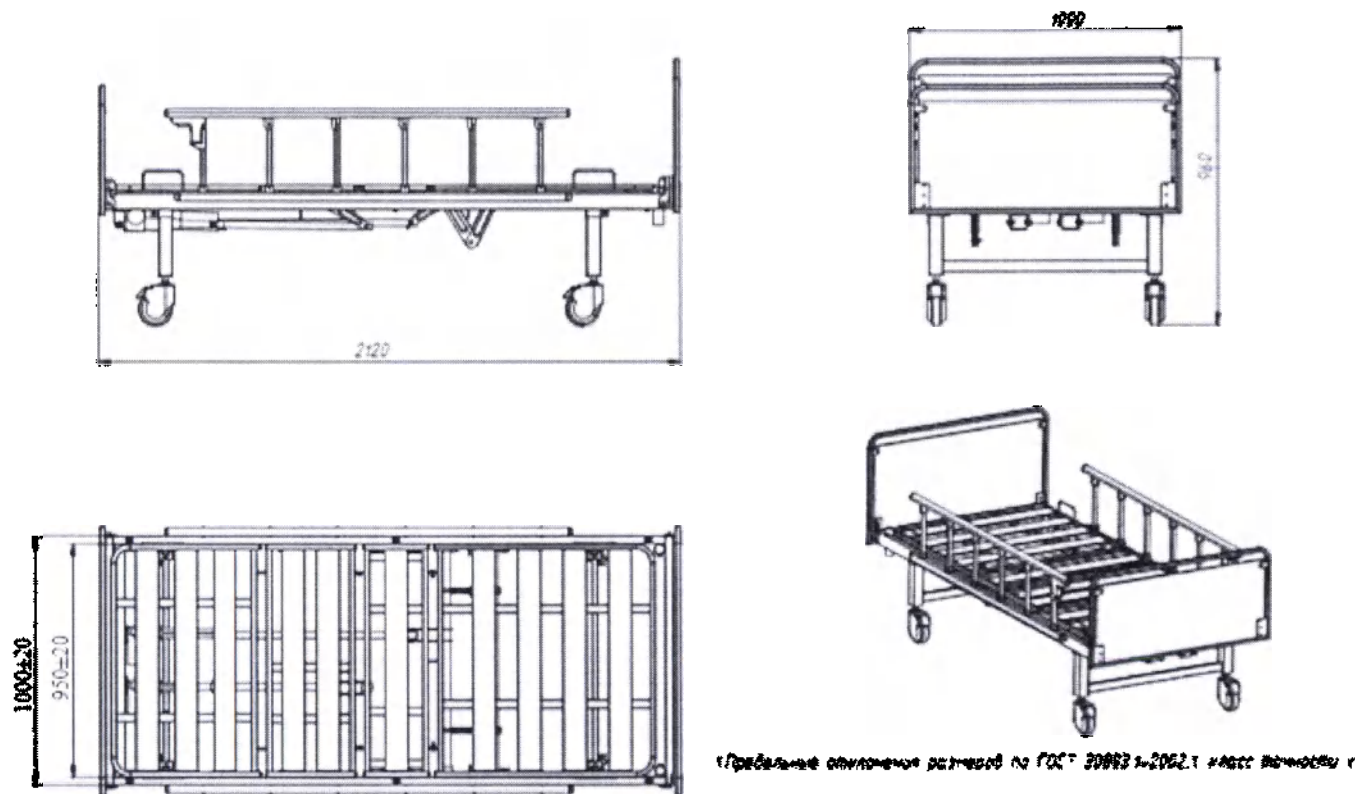


Рис. 27 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-2Bmws



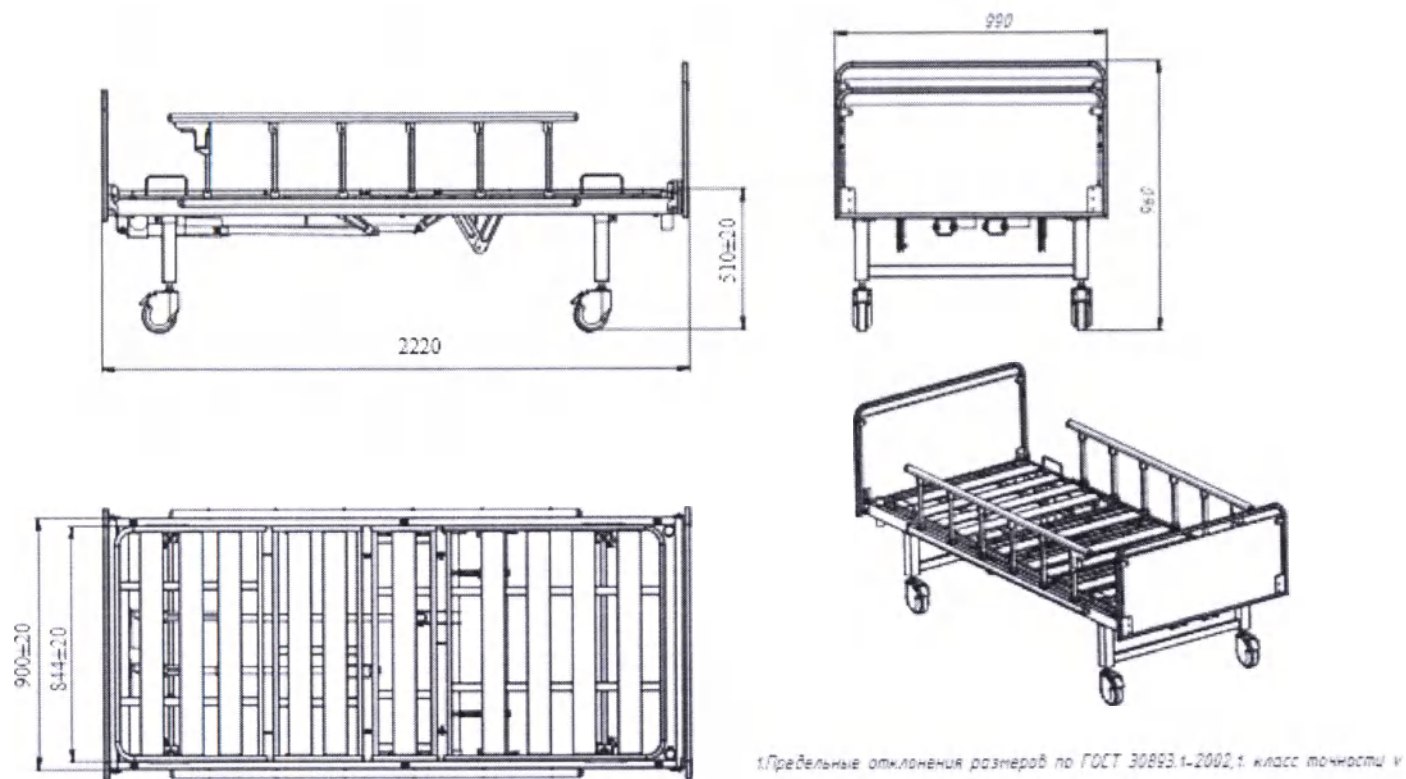


Рис. 28 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Smws

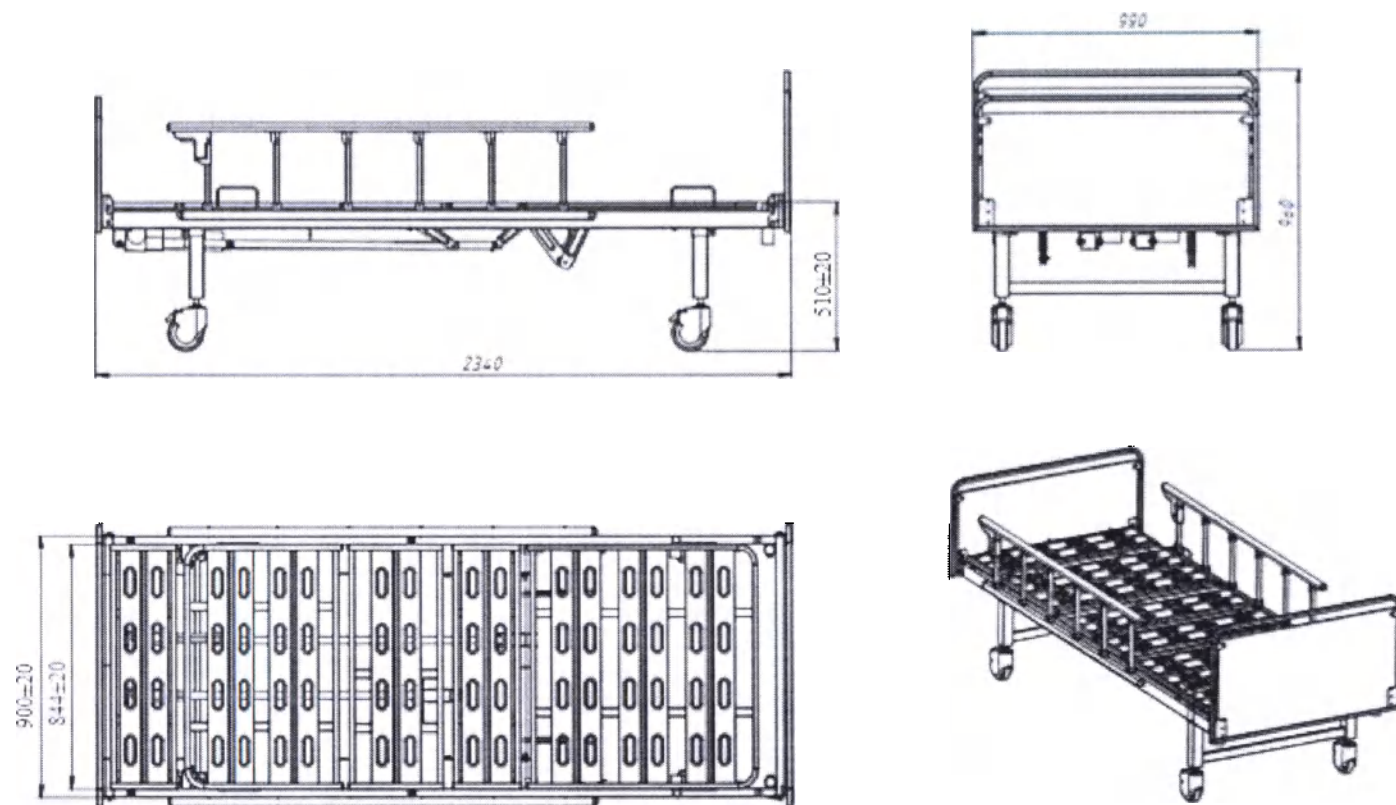

Габаритные значения размеров по ГОСТ 36893-1-2001, с класс. точности А

Рис. 29 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Lmwp

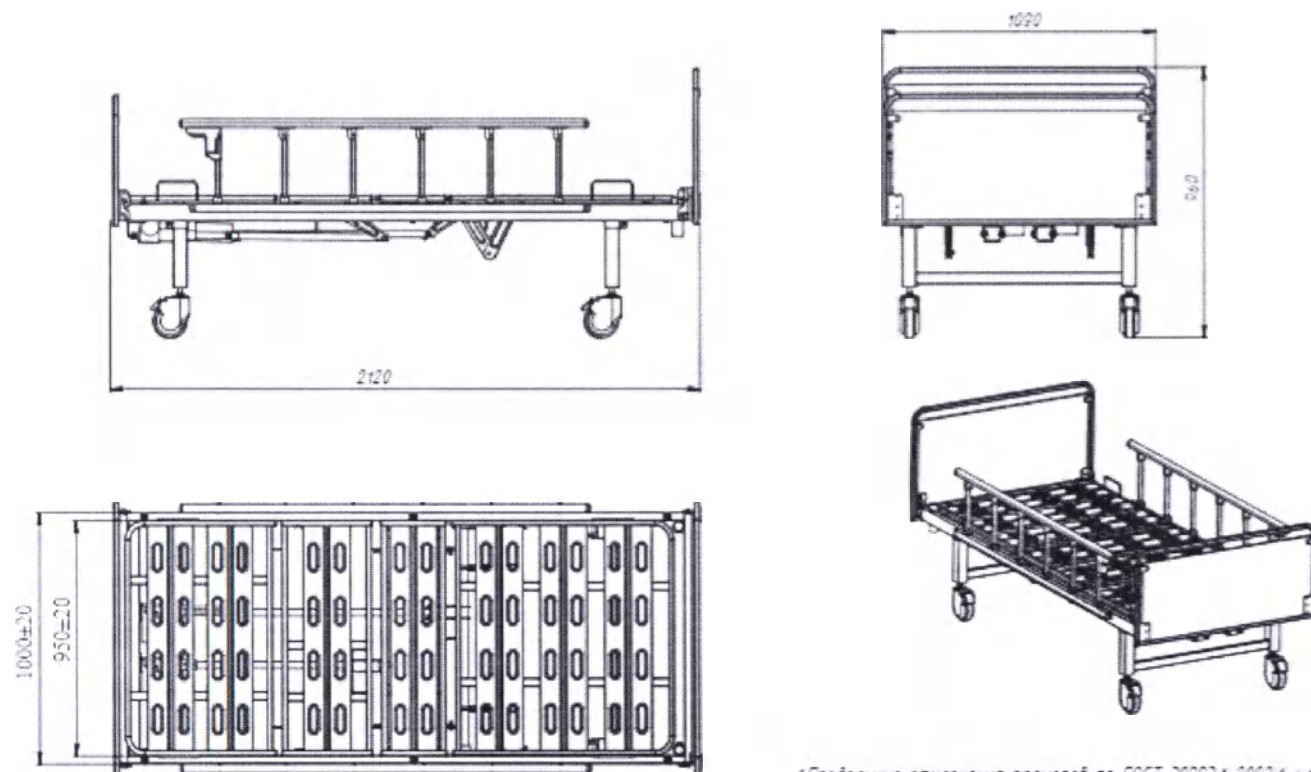

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, 1 класс точности и

Рис. 30 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Bmwp

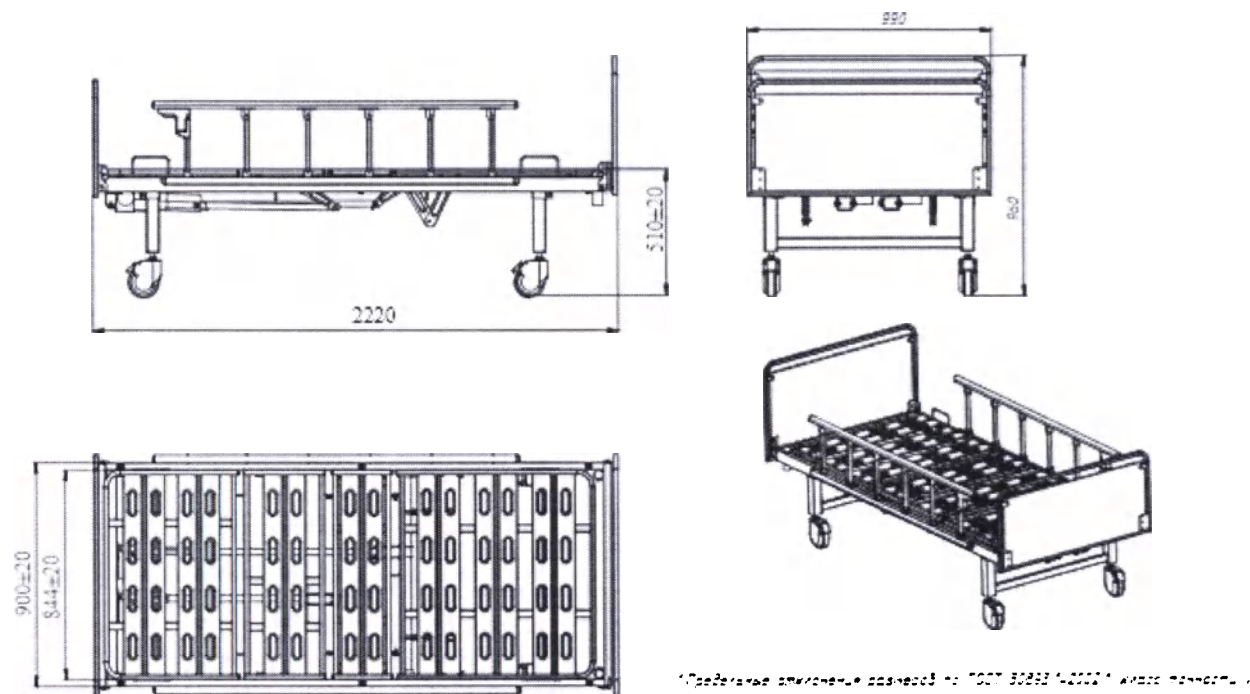


Рис. 31 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Smwp

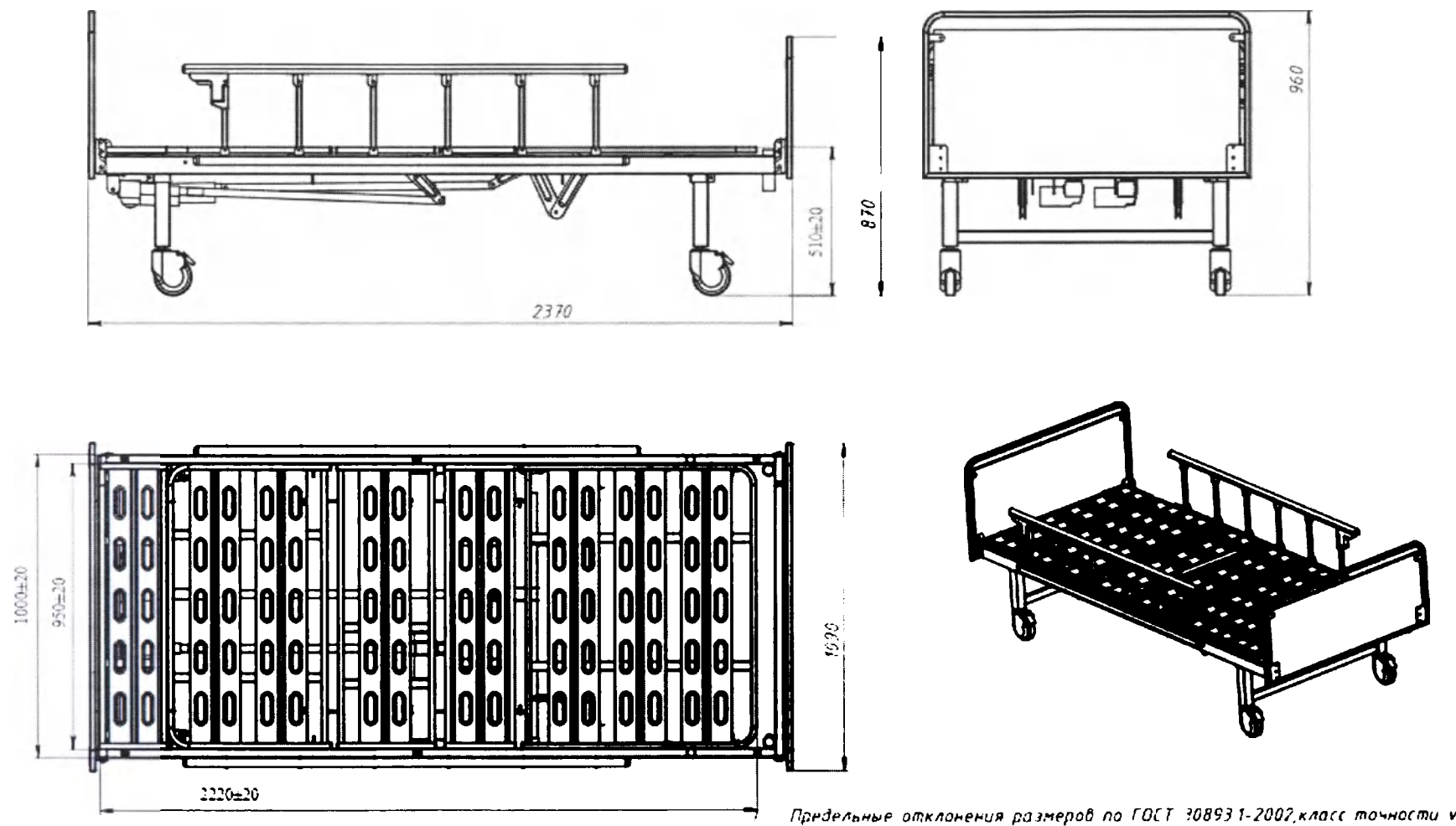
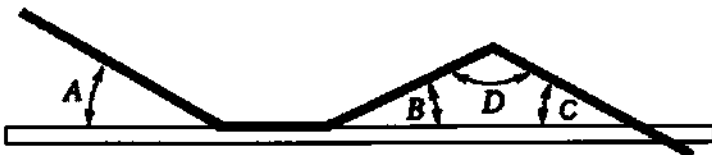


Рис. 32 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической
Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Umwp

Характеристика.	Значение			
	Barry MBE-2Smwp, Barry MBE-2Smws	Barry MBE-2Bmwp, Barry MBE-2Bmws	Barry MBE-2Lmwp, Barry MBE-2Lmws	Barry MBE-2Umwp, Barry MBE-2Umws
Тип основания	S - стандартное	B - широкое	L - удлиненное	U - универсальное
Высота от пола до матрасного основания кровати, (без учета высоты матраса), мм	510±20	510±20	510±20	510±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1980±20	1980±20	2220±20	2220±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	844±20	950±20	844±20	950
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	1000±20	900±20	1000±20
Высота с учетом изголовья, не более мм	960	960	960	960
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250


Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	172	176	176	180
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	310	314	314	318
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	85	85	85	85
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	155	157	157	159
Энергопотребление, ВА, не более	260	260	260	260
Количество секций, шт.	4	4	5	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная			

Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)				
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)			
Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)			
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)			
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)			
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления			
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный			
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	785×950×25	780×844×25	785×950×25

Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×950×25	230×844×25	230×950×25
Размер промежуточной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×950×25	320×844×25	320×950×25
Размер ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×950×25	540×844×25	540×950×25
Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	-	-	230×844×25	230×950×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%			
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ			
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4			
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B			


Общие габаритные размеры. Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2220×990×960	2120×1090×960	2340×990×960	2370×1090×960
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	1950	1950	1950	1950
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	68	72	72	77
Общая масса кровати, не более кг	73	77	77	82
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории AP или APG. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.				

7.1.5 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-3Spr, Barry MBE-3Lpp, Barry MBE-3Sps, Barry MBE-3Lps, Barry MBE-3Scp, Barry MBE-3Lcp, Barry MBE-3Scs, Barry MBE-3Lcs

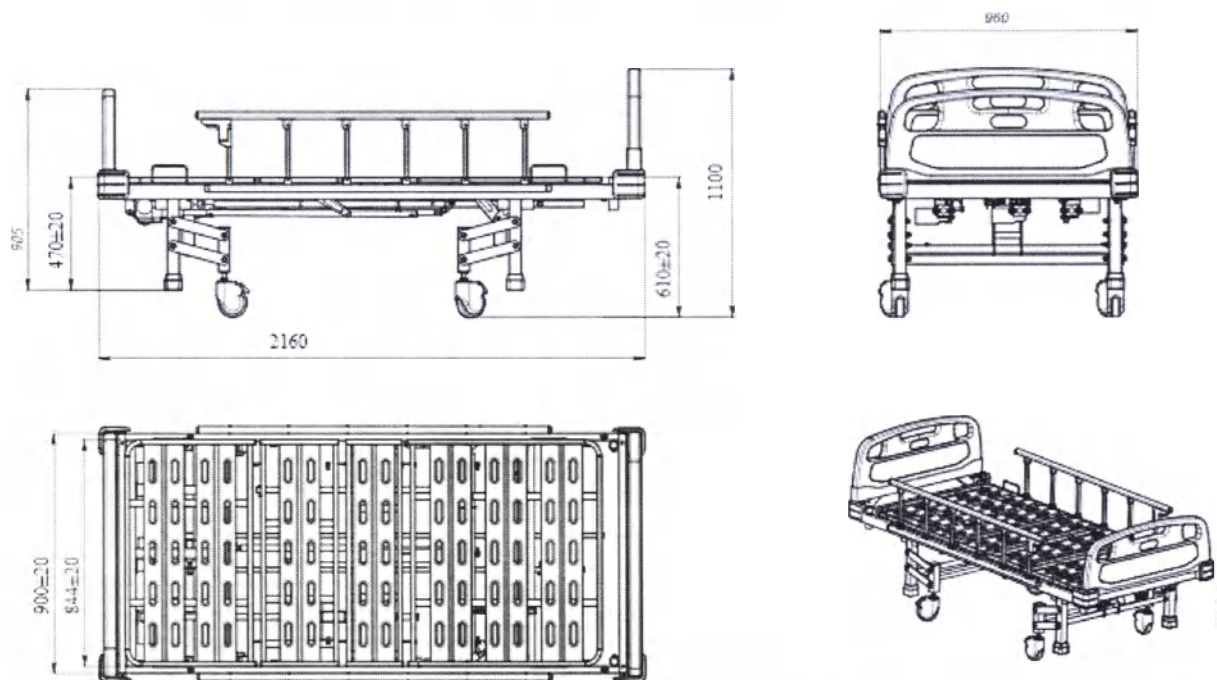




1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности V

Рис. 33 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Spr

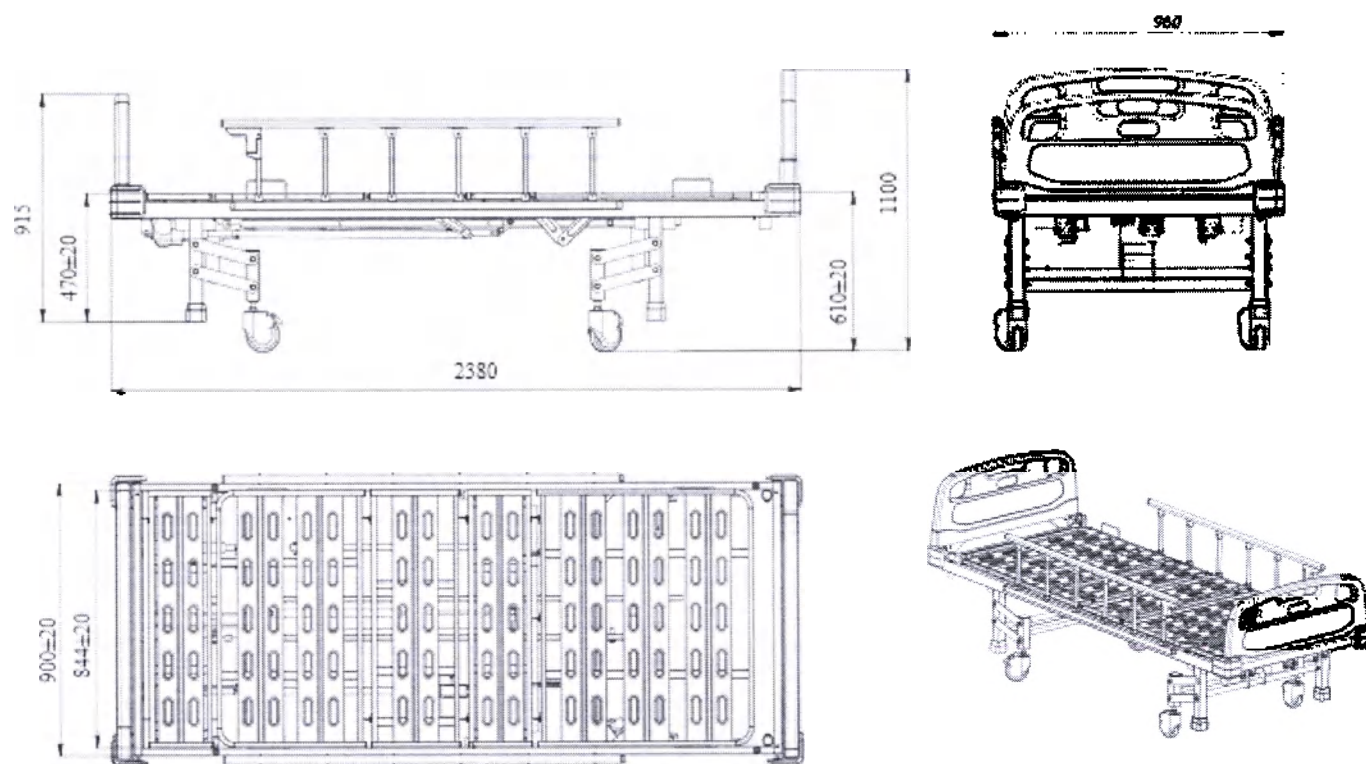


Приведенные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности V

Рис. 34 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggu, вариант исполнения Baggu MBE-3Lpp

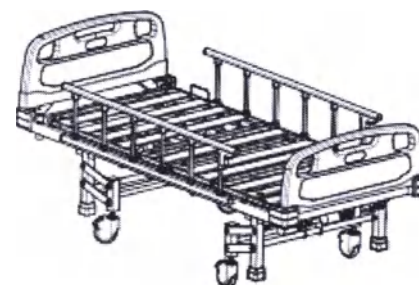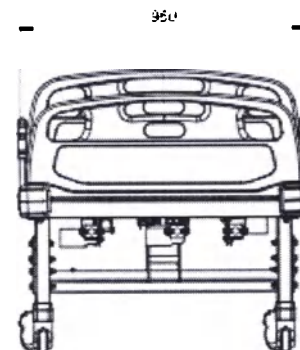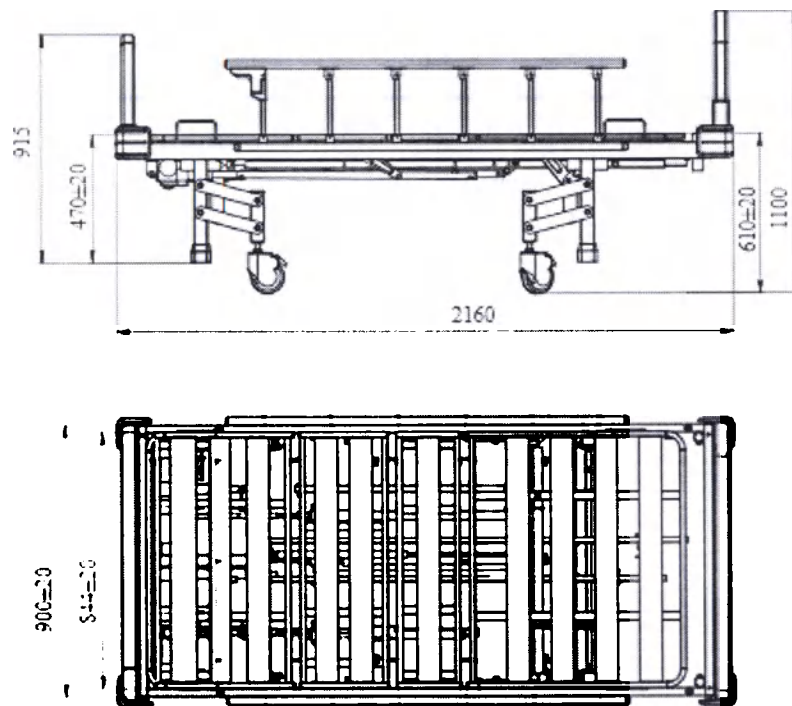


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30992-1-2002, класс точности А

Рис. 35 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bary, вариант исполнения Bary MBE-3Sps

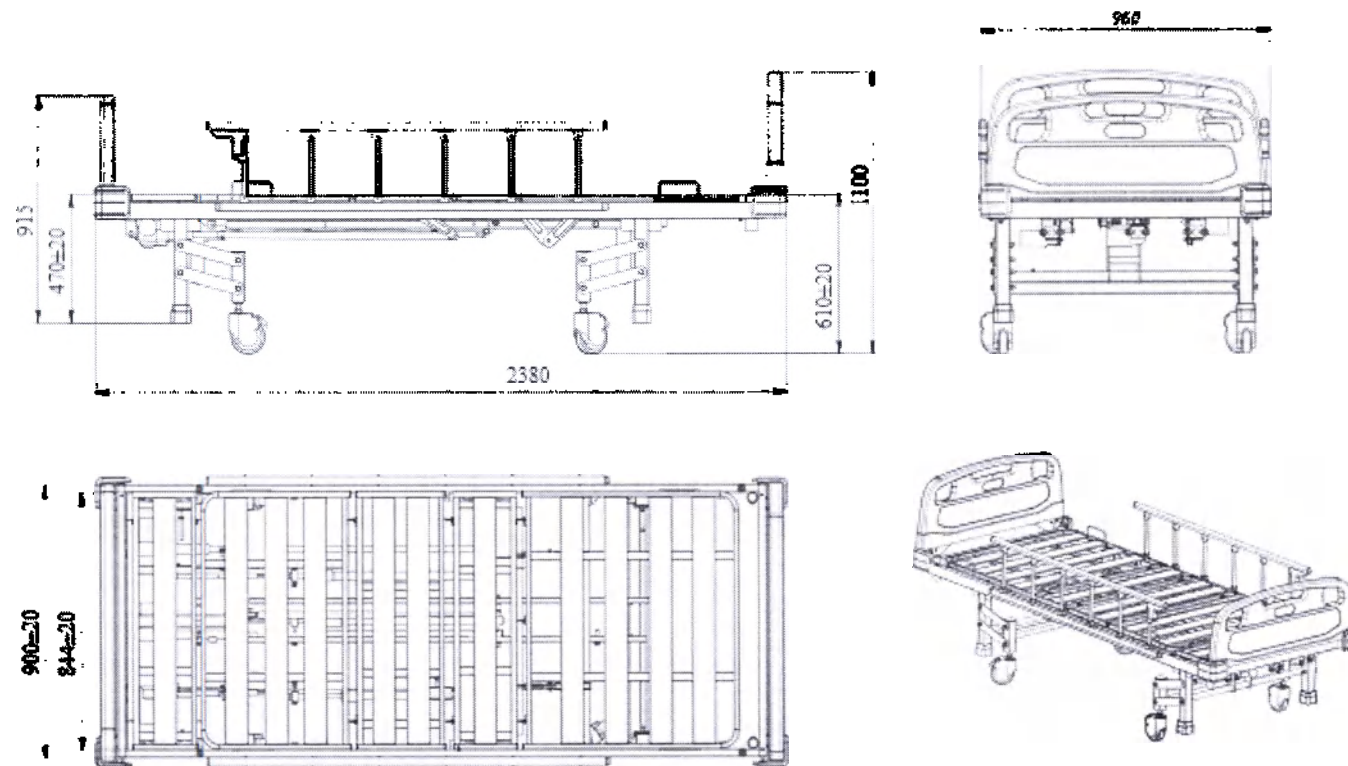


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30993.1-2002, класс точности V

Рис. 36 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baugu, вариант исполнения Baugu MBE-3Lps

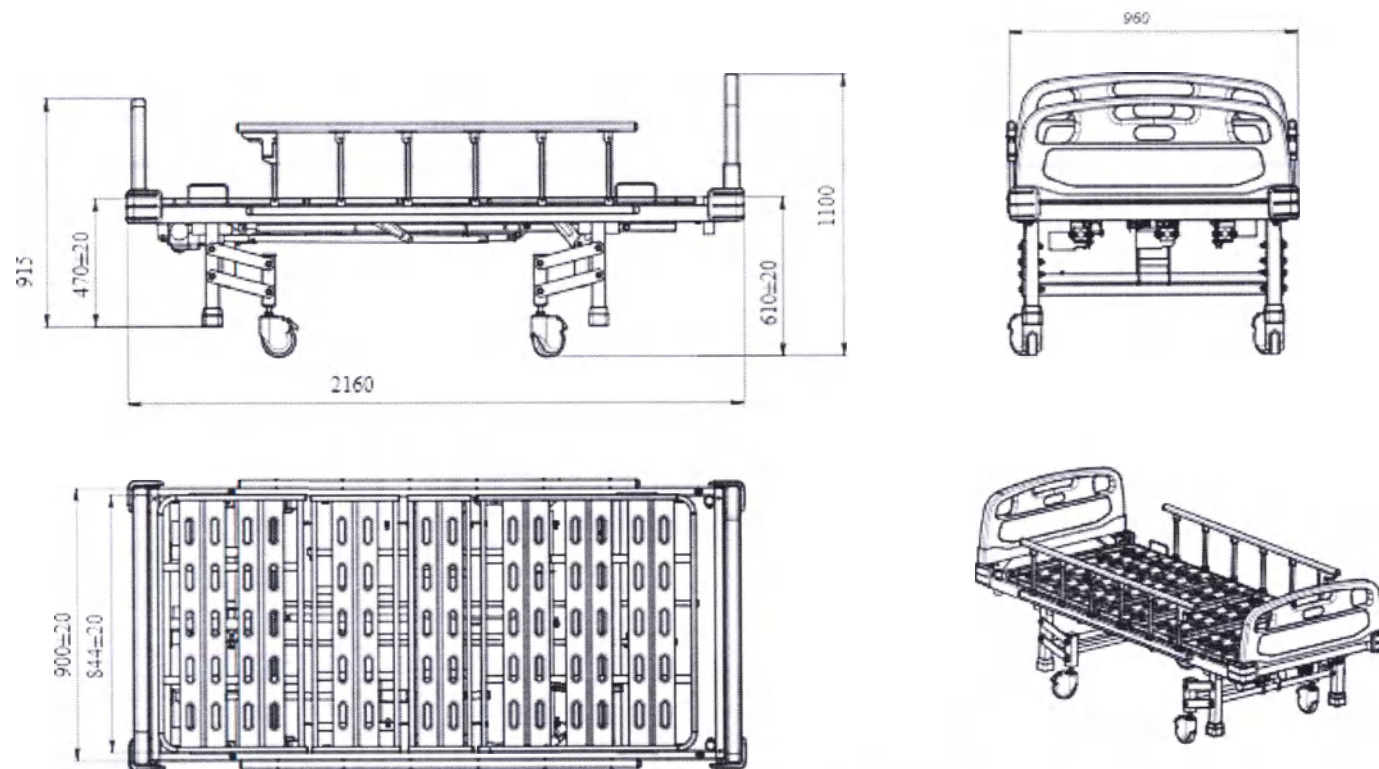


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности ч

Рис. 37 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Scp

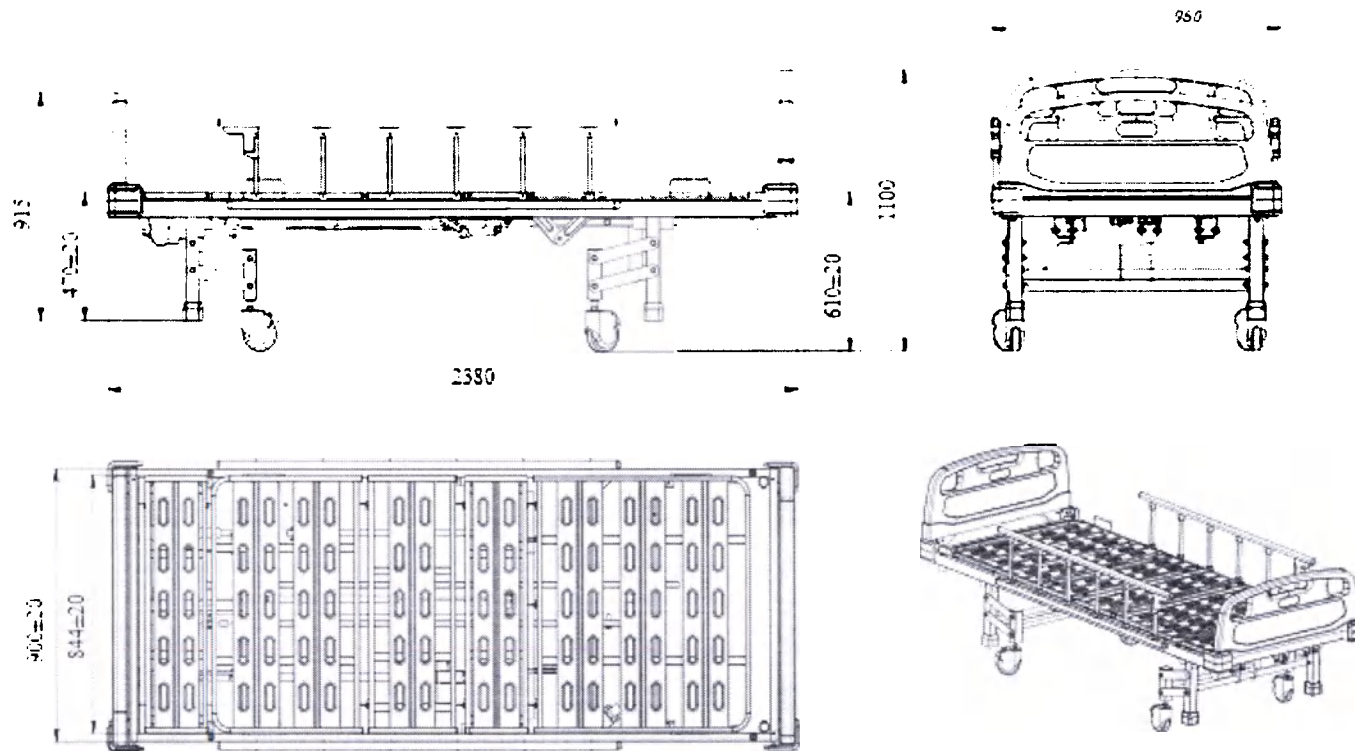


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности 1

Рис. 38 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Lcp

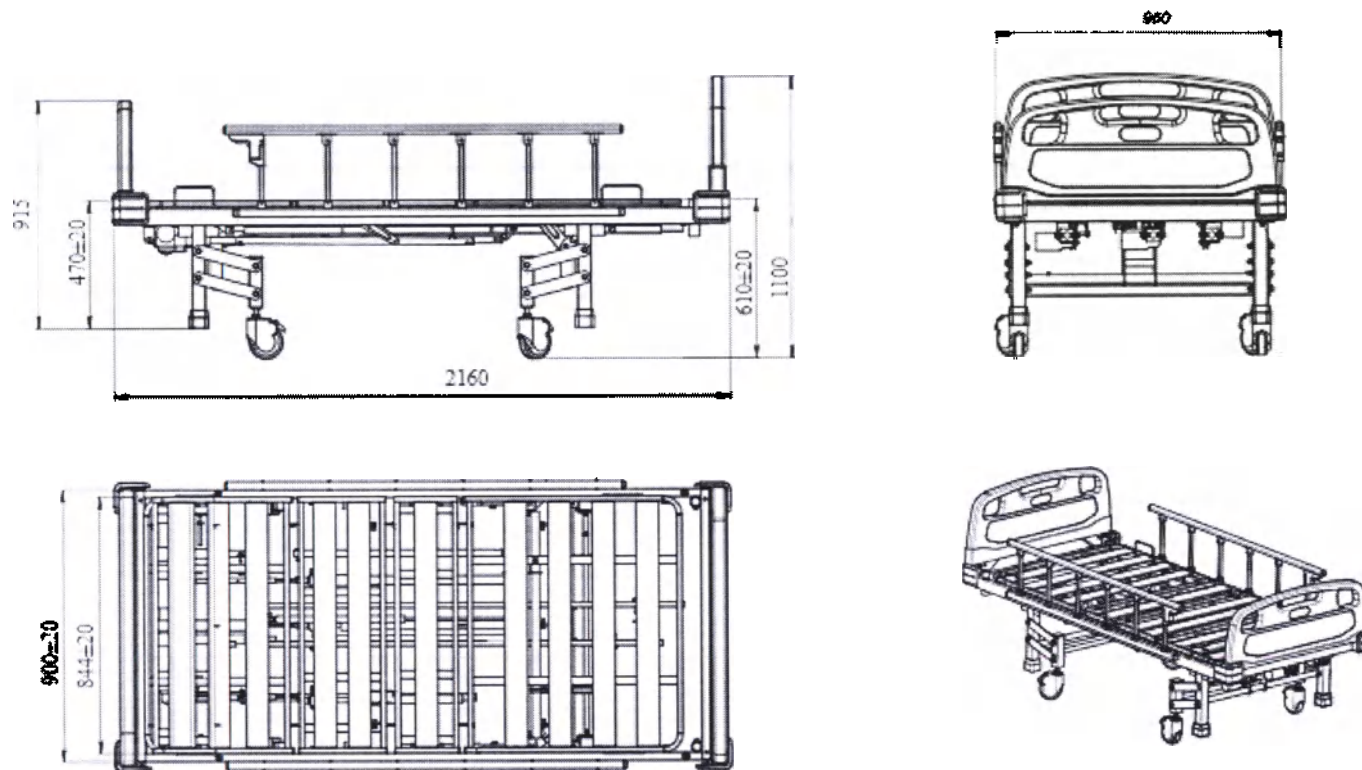

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893 1-2002, класс точности 4

Рис. 39 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bary, вариант исполнения Bary MB-3Scs

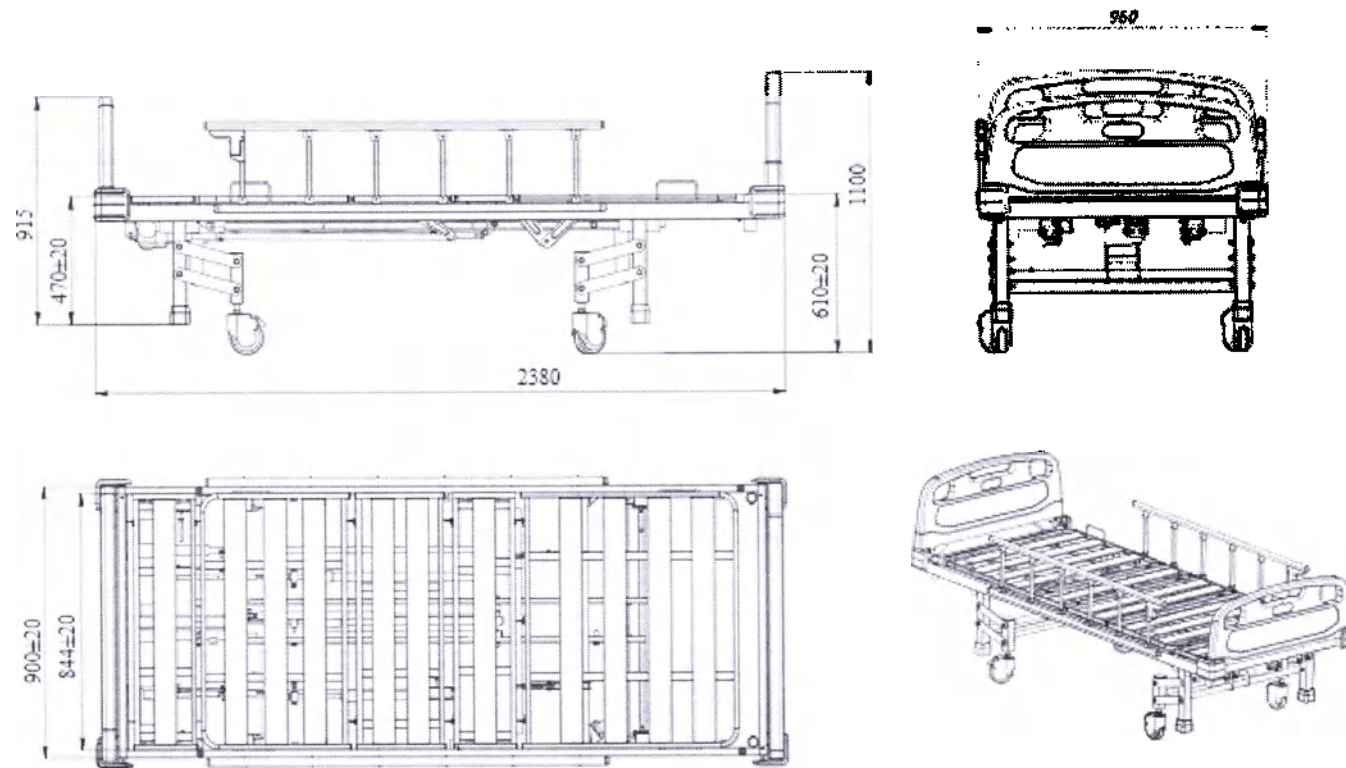


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693-1-2002, «класс точности»

Рис. 40 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggu, вариант исполнения Baggu MBE-3Lcs

Характеристика	Значение	
Наименование модели	Barry MBE-3Spp, Barry MBE-3Sps, Barry MBE-3Scp, Barry MBE-3Scs	Barry MBE-3Lpp, Barry MBE-3Lps, Barry MBE-3Lcp, Barry MBE-3Lcs
Тип основания	S - стандартное	L - удлиненное
Высота от пола до матрасного основания кровати в крайнем верхнем положении (без учета высоты матраса), мм	610±20	610±20
Высота от пола до матрасного основания кровати в крайнем нижнем положении, мм	470±20	470±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1980±20	2220±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	844±20	844±20
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	900±20
Высота с учетом изголовья, не более мм	950	950


Высота кровати с учетом изголовья в крайнем верхнем положении, не более мм	1100	1100
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	191	195
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	325	329
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	85	85
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	160	160
Энергопотребление, ВА, не более	260	260
Количество секций, шт.	4	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная	

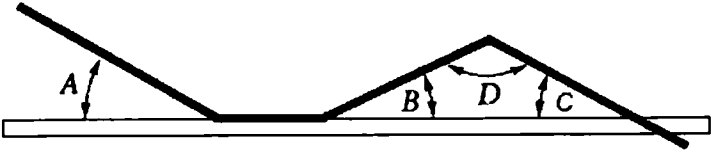Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)		
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)	
Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)	
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)	
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)	
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления	
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный	
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	780×844×25

Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×844×25
Размер промежуточной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×844×25
Размер ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×844×25
Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	-	230×844×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50 Гц	
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ	
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4	
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B	
Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех	2160×960×950	2380×960×950


секций в горизонтальное положение), не более мм		
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	2500	2500
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	84	88
Общая масса кровати, не более кг	89	93
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории АР или АРГ. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.		

7.1.6 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-3Swp, Barry MBE-3Bwp, Barry MBE-3Lwp, Barry MBE-3Uwp, Barry MBE-3Sws, Barry MBE-3Bws, Barry MBE-3Lws, Barry MBE-3Uws

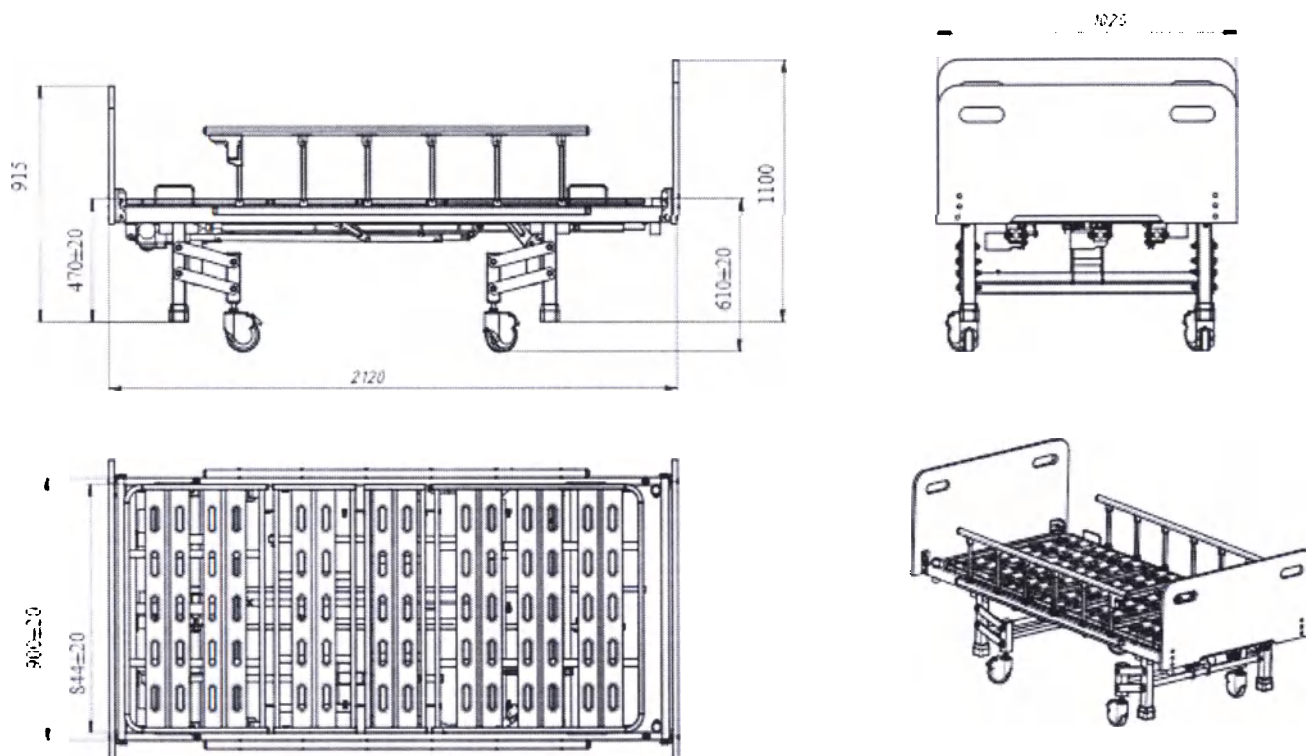


Габаритные значения размеров по ГОСТ 30893-1-2002, класс точности V

Рис. 41 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Swp

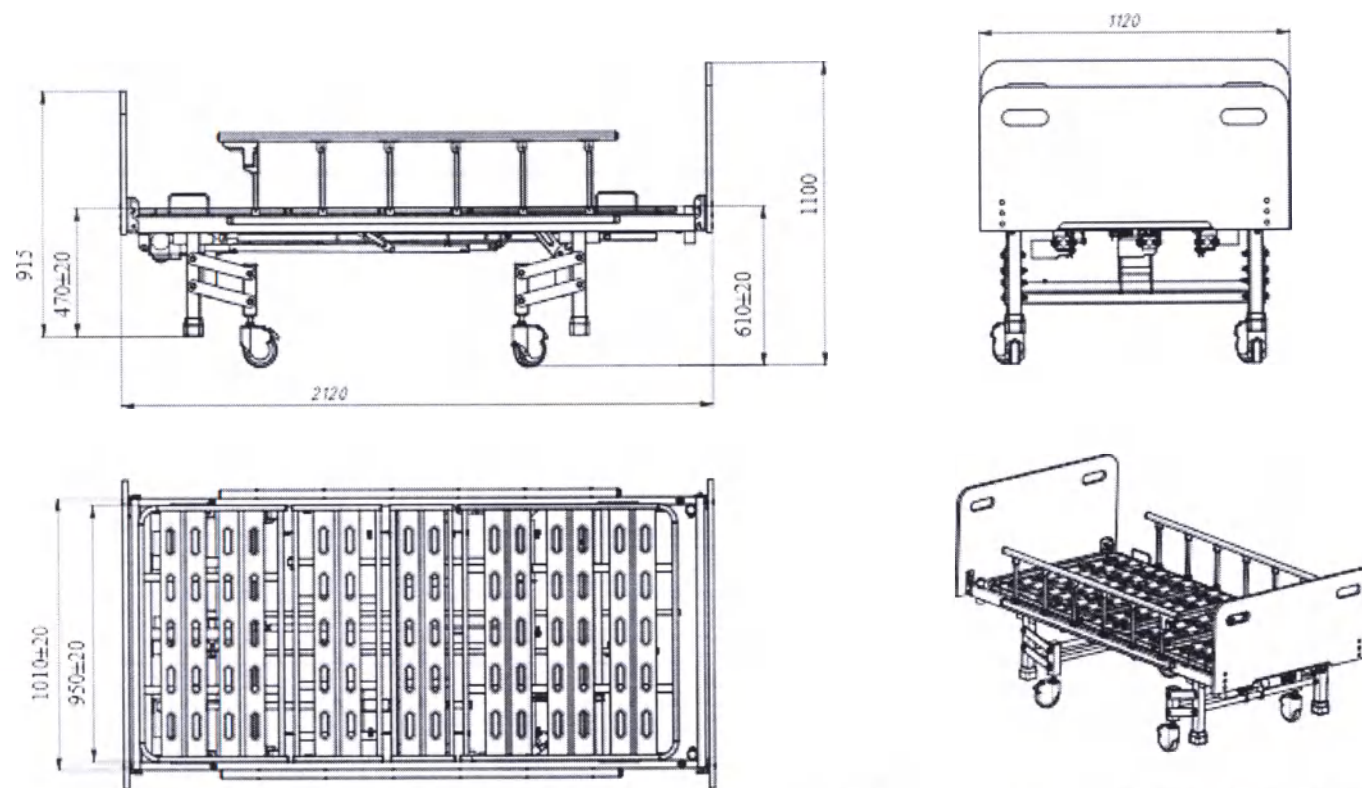


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности V.

Рис. 42 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Bwp

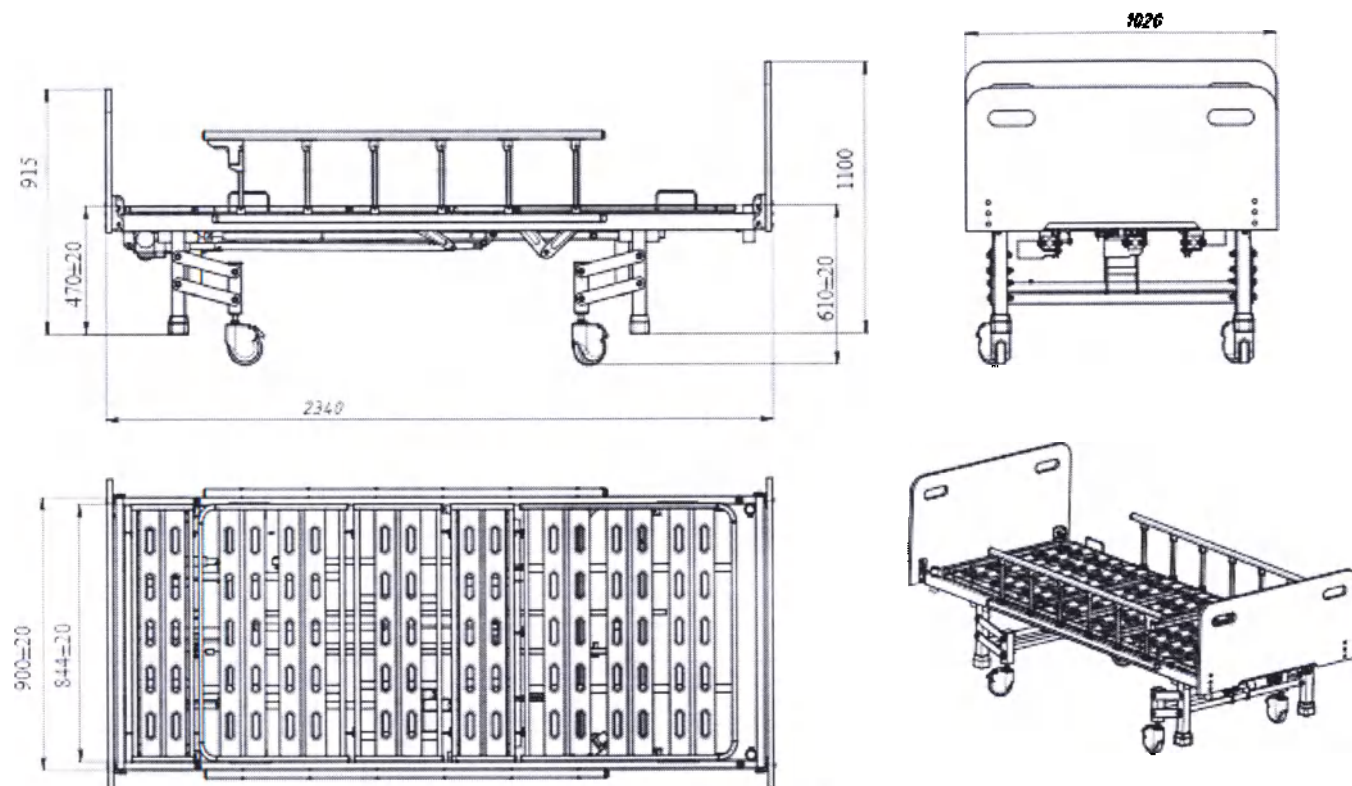


1 Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности 4

Рис. 43 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggu, вариант исполнения Baggu MBE-3Lwp

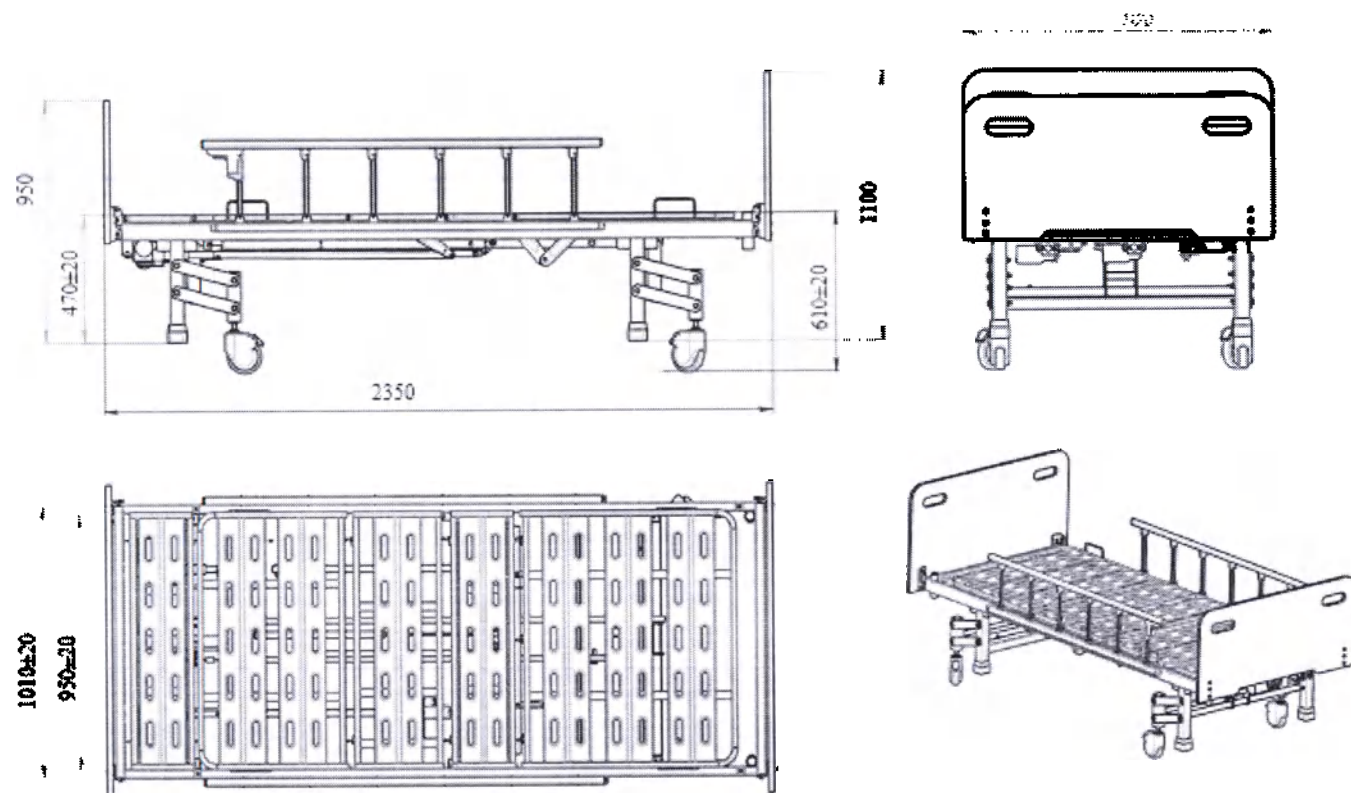


Габаритные значения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности А

Рис. 44 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bagru, вариант исполнения Bagru MBE-3Uwp

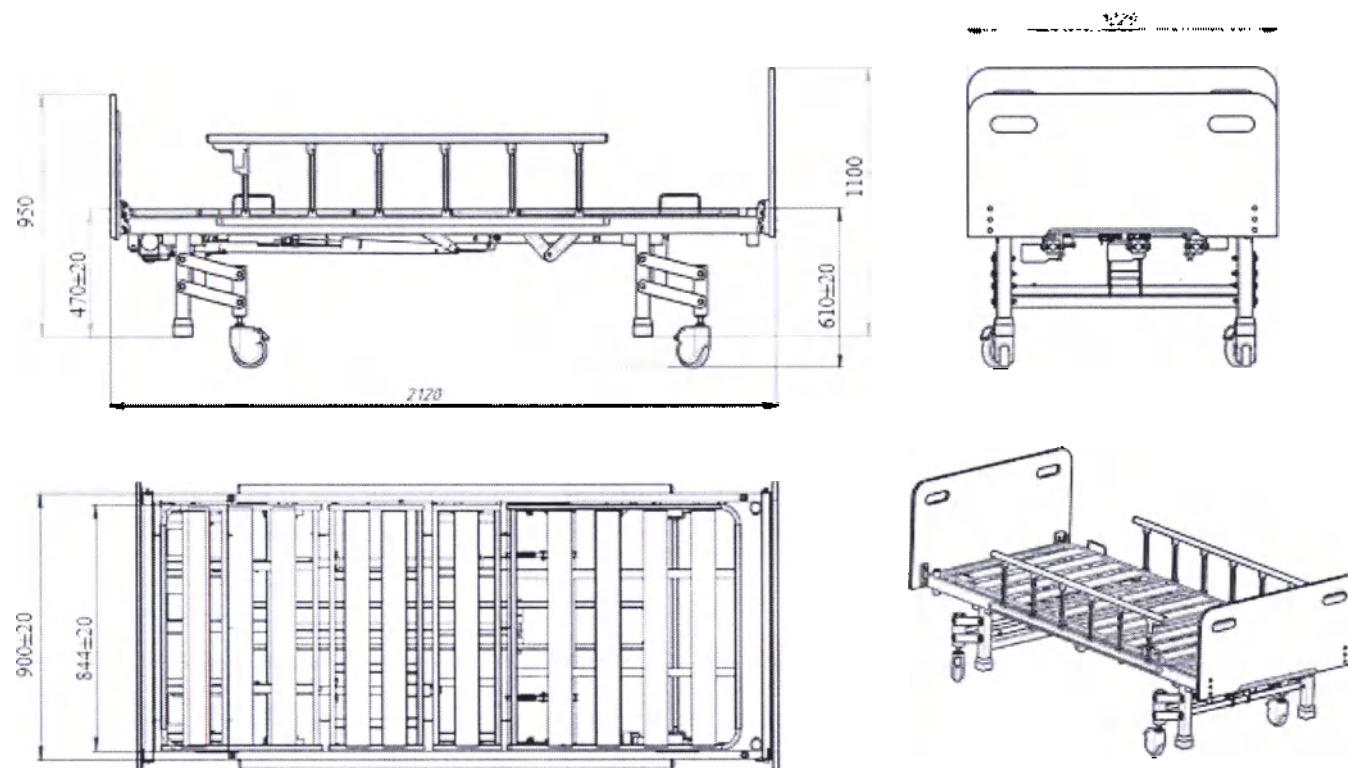


Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, класс точности γ

Рис. 45 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-3Swz

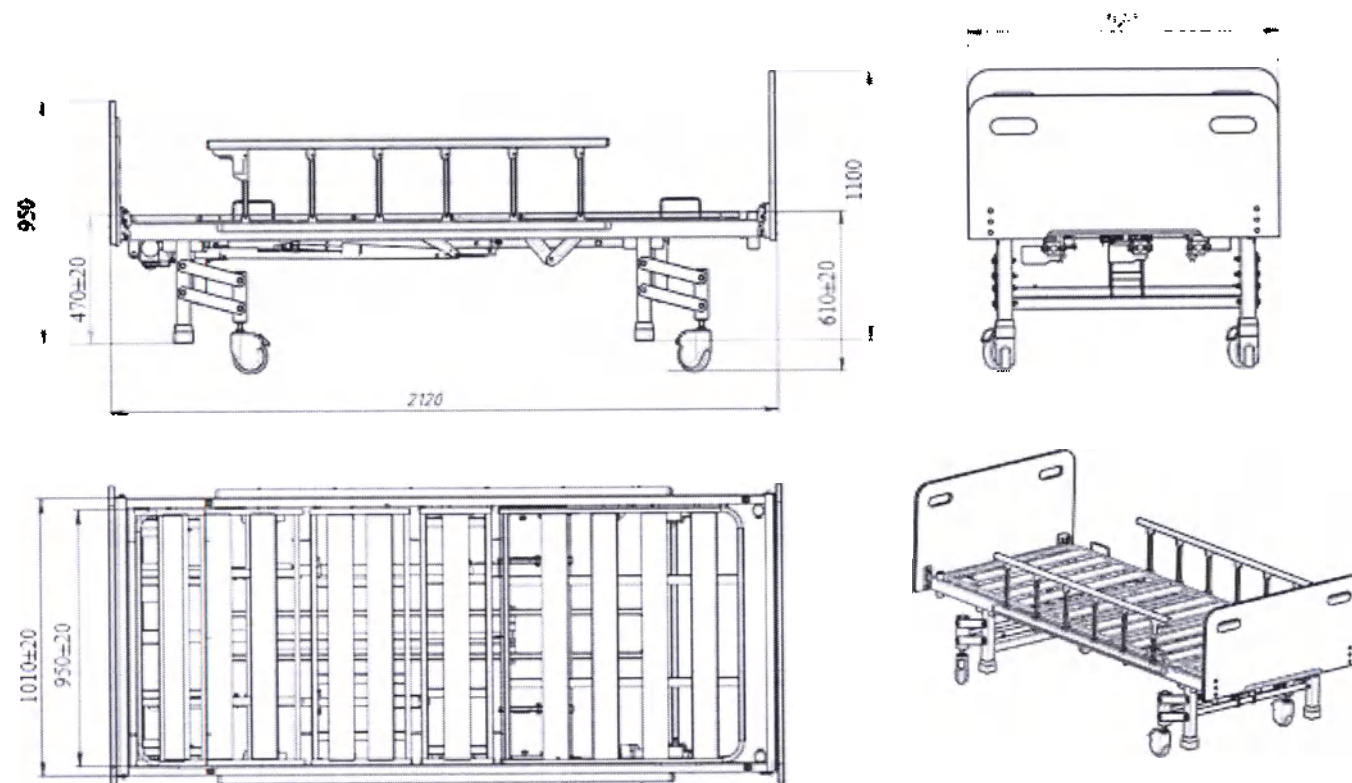


Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности Ч

Рис. 46 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baitu, вариант исполнения Baitu MBE-3Bw3

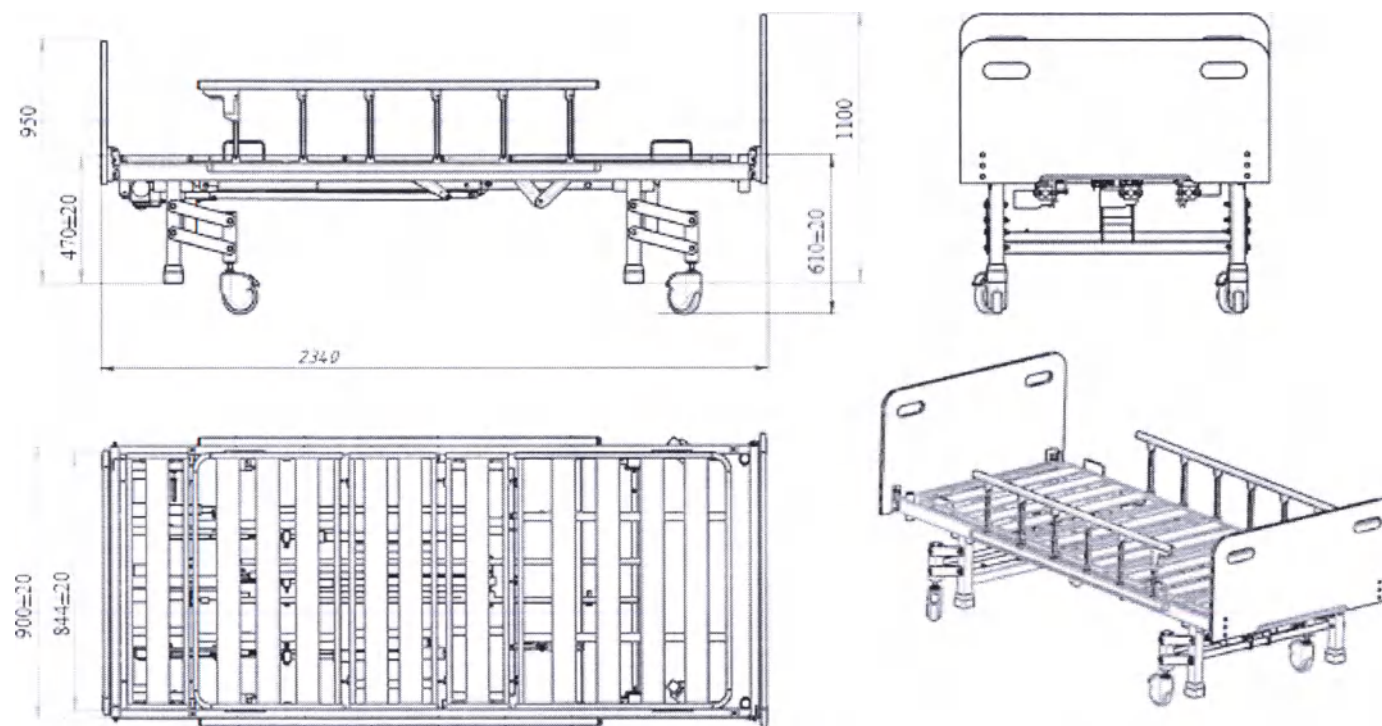

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности γ

Рис. 47 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-3Lws

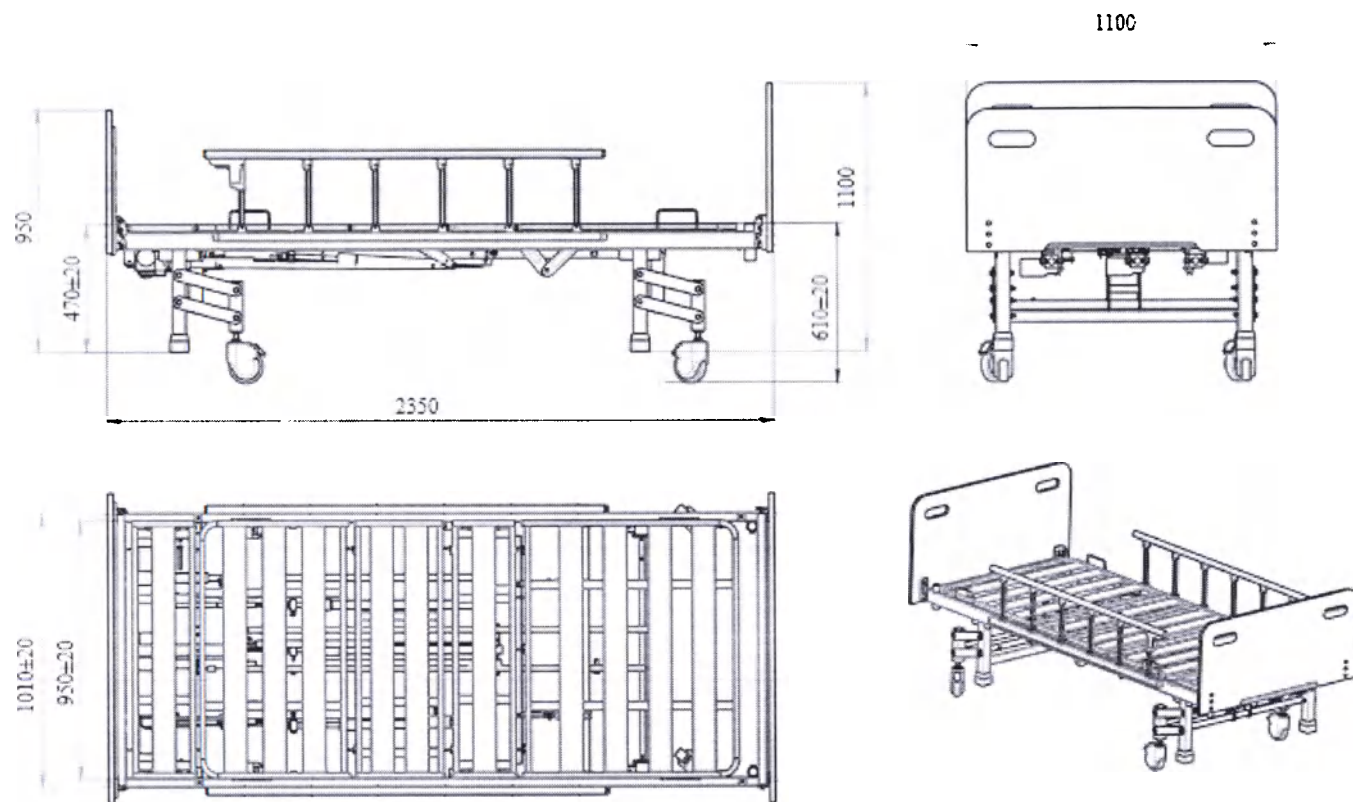


1 Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30993-2002, класс точности 1

Рис. 48 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Uws

Характеристика	Значение			
	Barry MBE-3Swp, Barry MBE-3Sws	Barry MBE-3Bwp, Barry MBE-3Bws	Barry MBE-3Lwp, Barry MBE-3Lws	Barry MBE-3Uwp, Barry MBE-3Uws
Тип основания	S - стандартное	B - широкое	L - удлиненное	U - универсальное
Высота от пола до матрачного основания кровати в крайнем верхнем положении (без учета высоты матраца), мм	610±20	610±20	610±20	610±20
Высота от пола до матрачного основания кровати в крайнем нижнем положении, мм	470±20	470±20	470±20	470±20
Длина матрачного основания кровати, мм	1980±20	1980±20	2220±20	2220±20
Ширина матрачного основания кровати, мм	844±20	950±20	844±20	950±20
Ширина матрачного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	1010±20	900±20	1010±20

Высота с учетом изголовья, не более мм	950	950	950	950
Высота кровати с учетом изножья и изголовья в крайнем верхнем положении, не более мм	1100	1100	1100	1100
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	204	208	208	212
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	338	342	342	346
Максимальное усилие перемещения с разблокированными	85	85	85	85

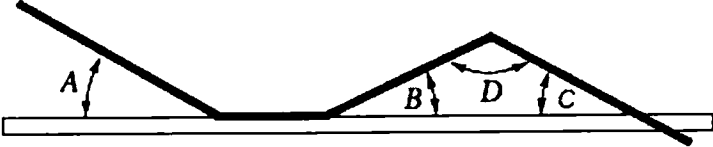тормозами (усилие передвижения), Н				
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	160	160	160	160
Энергопотребление, ВА, не более	260	260	260	260
Количество секций, шт.	4	4	5	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная			
Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)				
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)			

Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)			
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)			
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)			
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления			
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный			
Размер спинной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	790×950×25	780×844×25	790×950×25
Размер тазобедренной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×950×25	230×844×25	230×950×25

Размер промежуточной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×950×25	320×844×25	320×950×25
Размер ножной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×950×25	540×844×25	540×950×25
Размер неподвижной ножной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	-	-	230×844×25	230×950×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%			
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ			
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4			
Защита от поражения электрическим током	класс I тип В			

Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2120×1020×950	2120×1120×950	2340×1020×950	2350×1100×950
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	2500	2500	2500	2500
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	98	102	102	107
Общая масса кровати, не более кг	103	107	107	112
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории АР или АРГ. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.				

7.1.7 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-3Smwp, Barry MBE-3Bmwp, Barry MBE-3Lmwp, Barry MBE-3Umwp, Barry MBE-3Smws, Barry MBE-3Bmws, Barry MBE-3Lmws, Barry MBE-3Umws



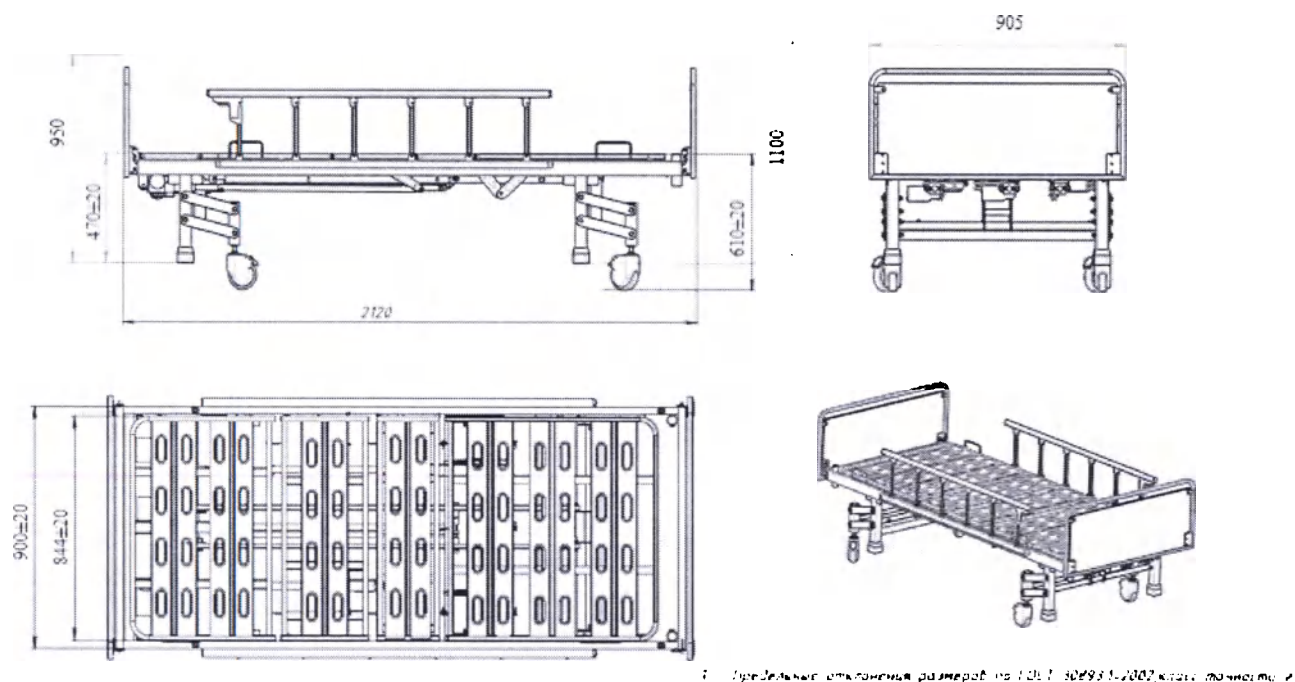


Рис. 49 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Smwp

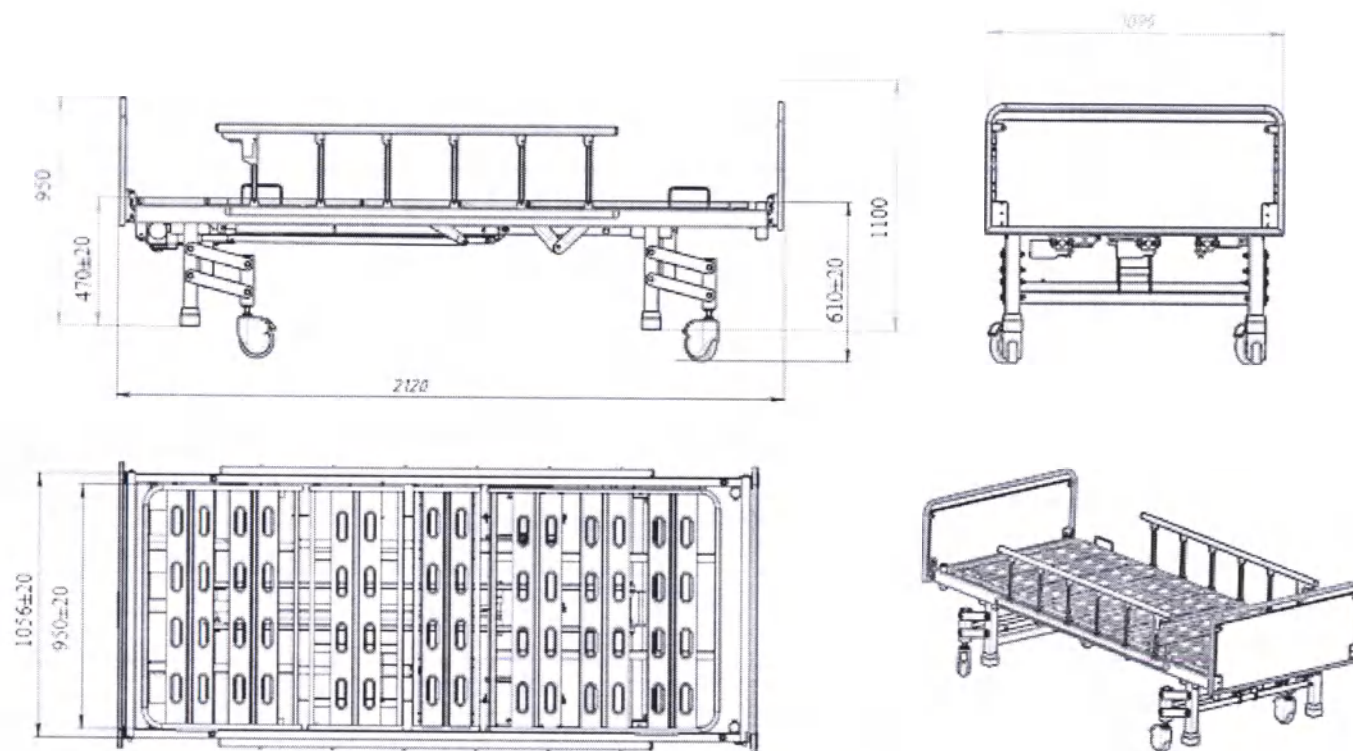


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности 7

Рис. 50 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Bmwp

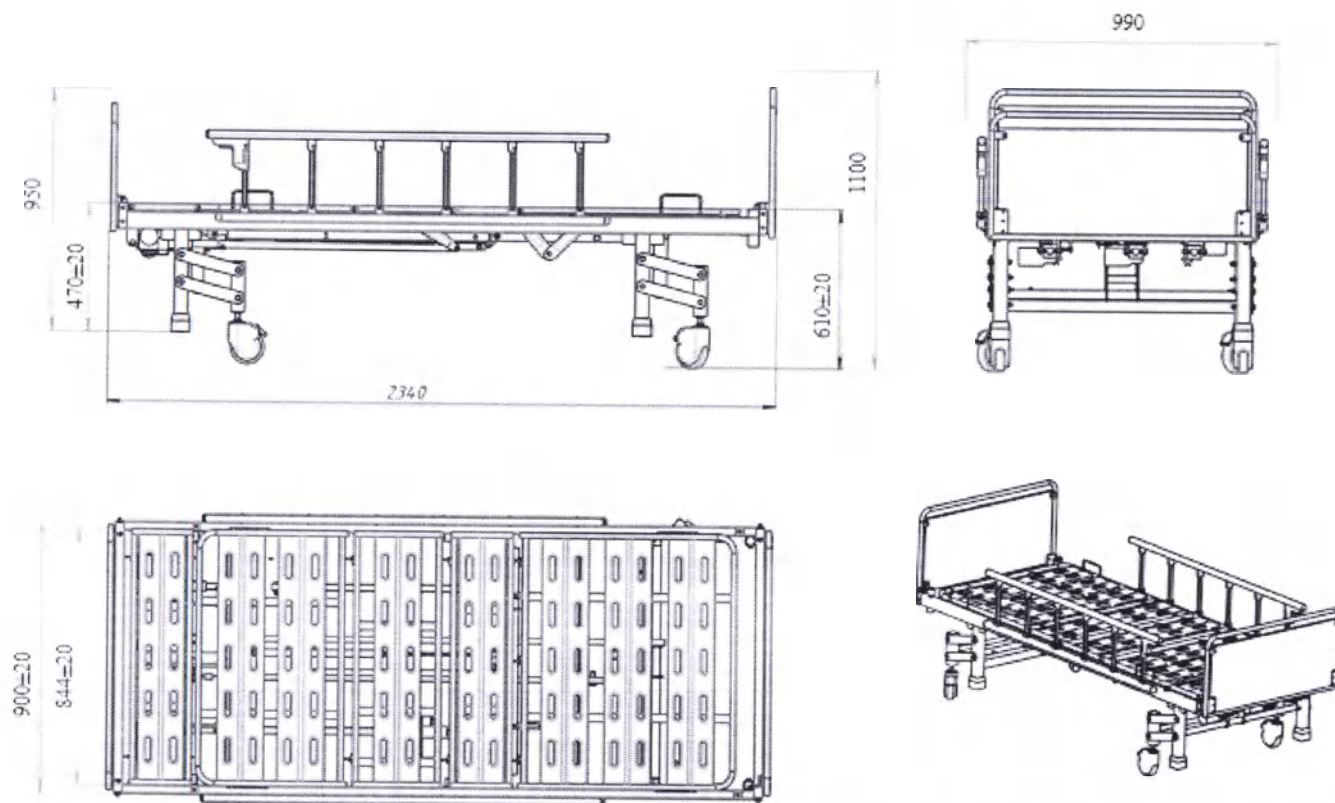


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности V

Рис. 51 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Lmwp

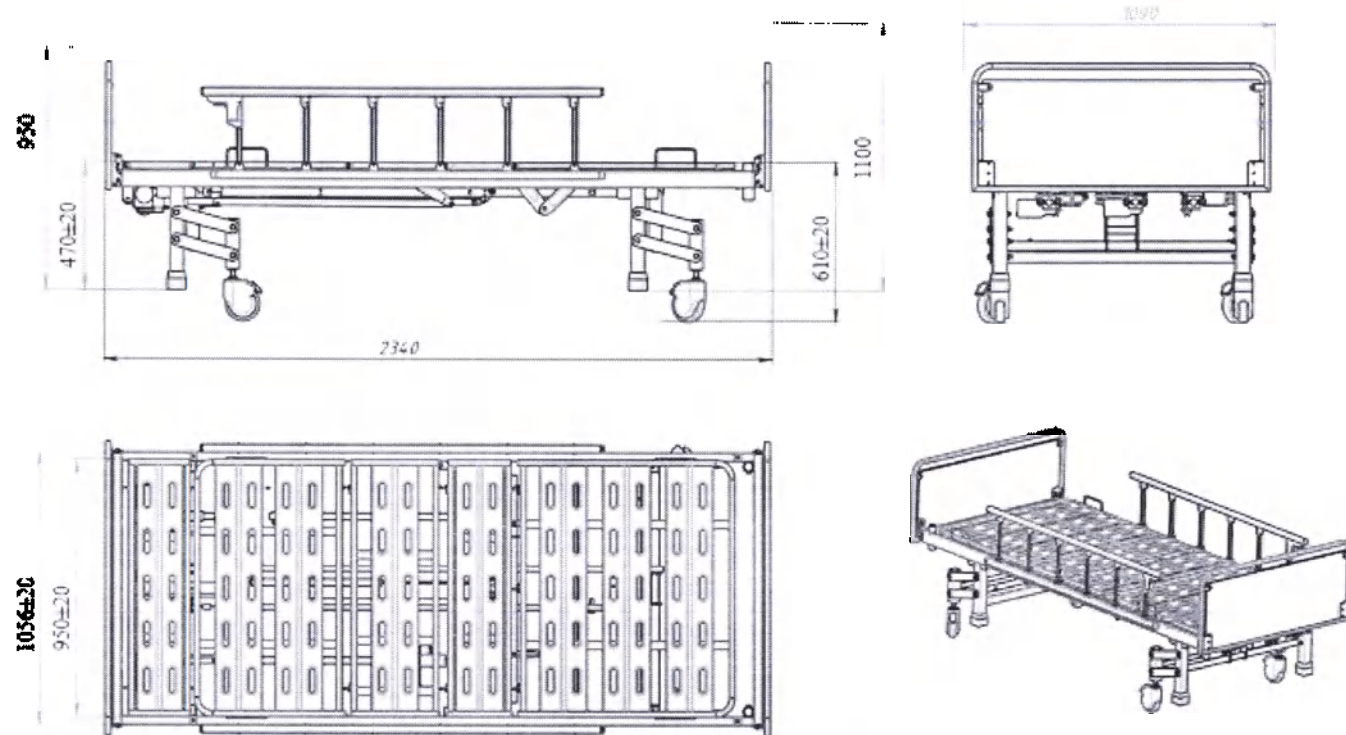





1. Пределы отклонений размеров по ГОСТ 30193.1-2002, класс точности Ч

Рис. 52 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bary, вариант исполнения Bary MBE-3Uмвр

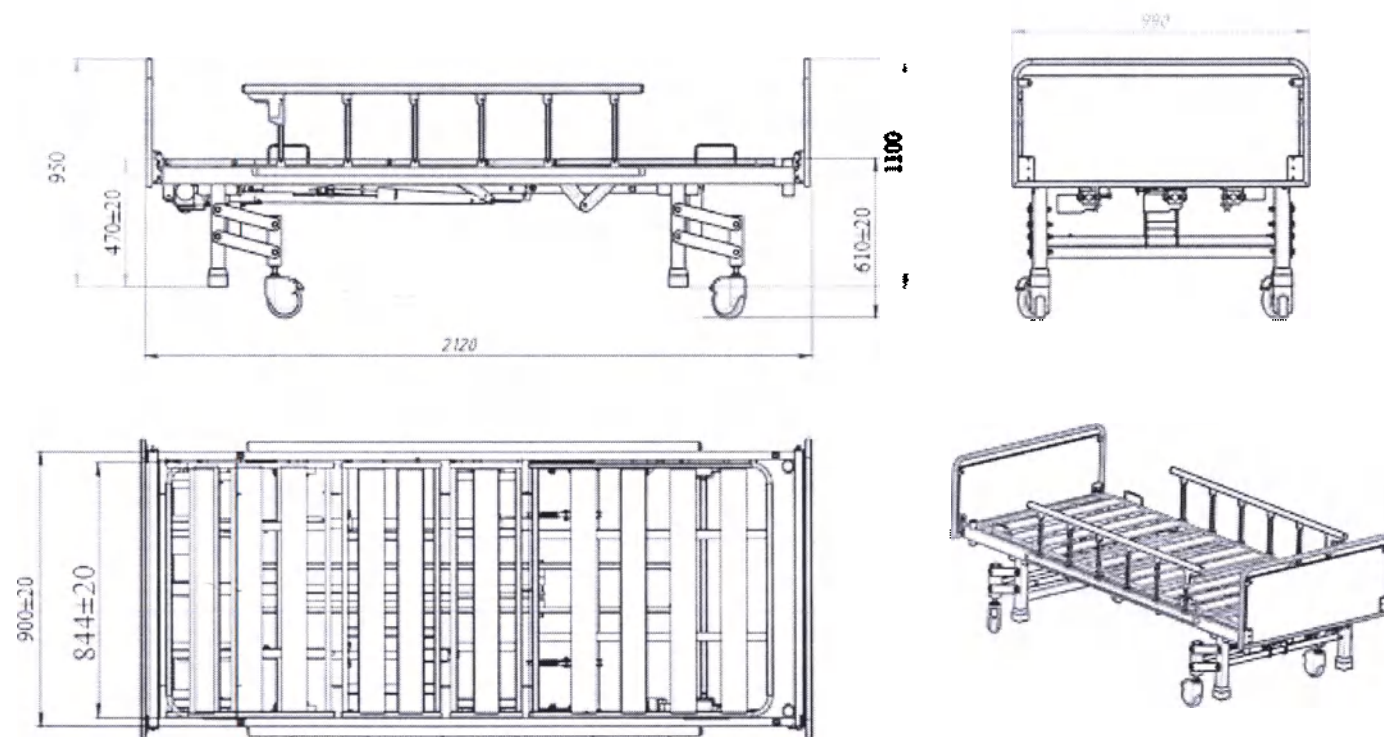


1 Предельные значения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности 1

Рис. 53 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Smws

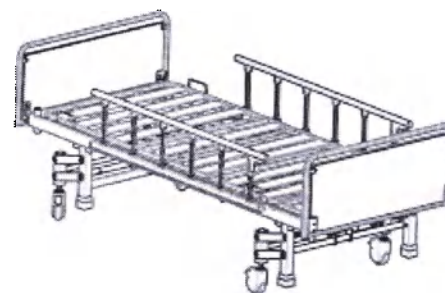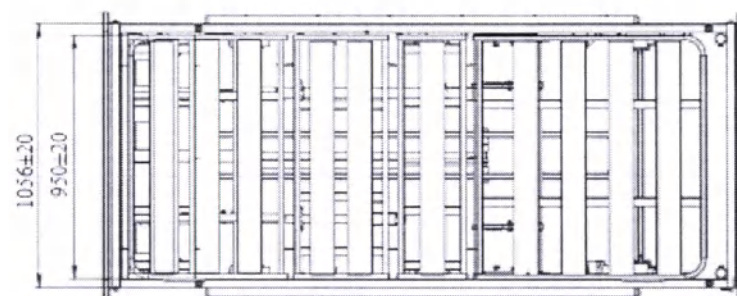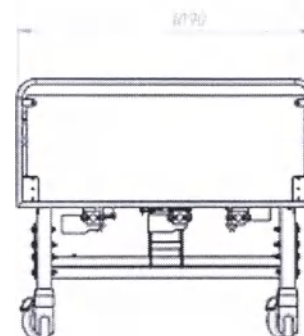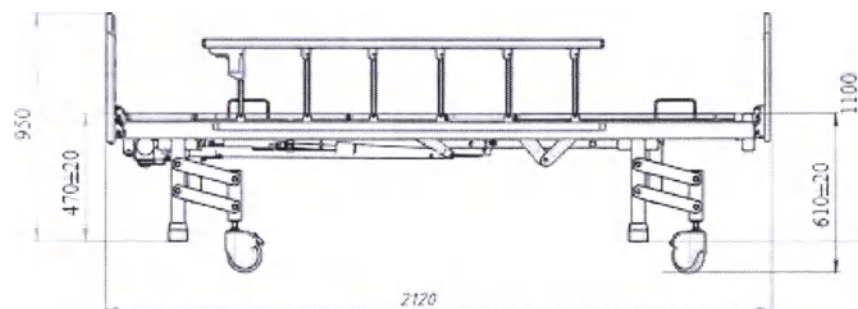


† Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, класс точности 4

Рис. 54 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Bmws

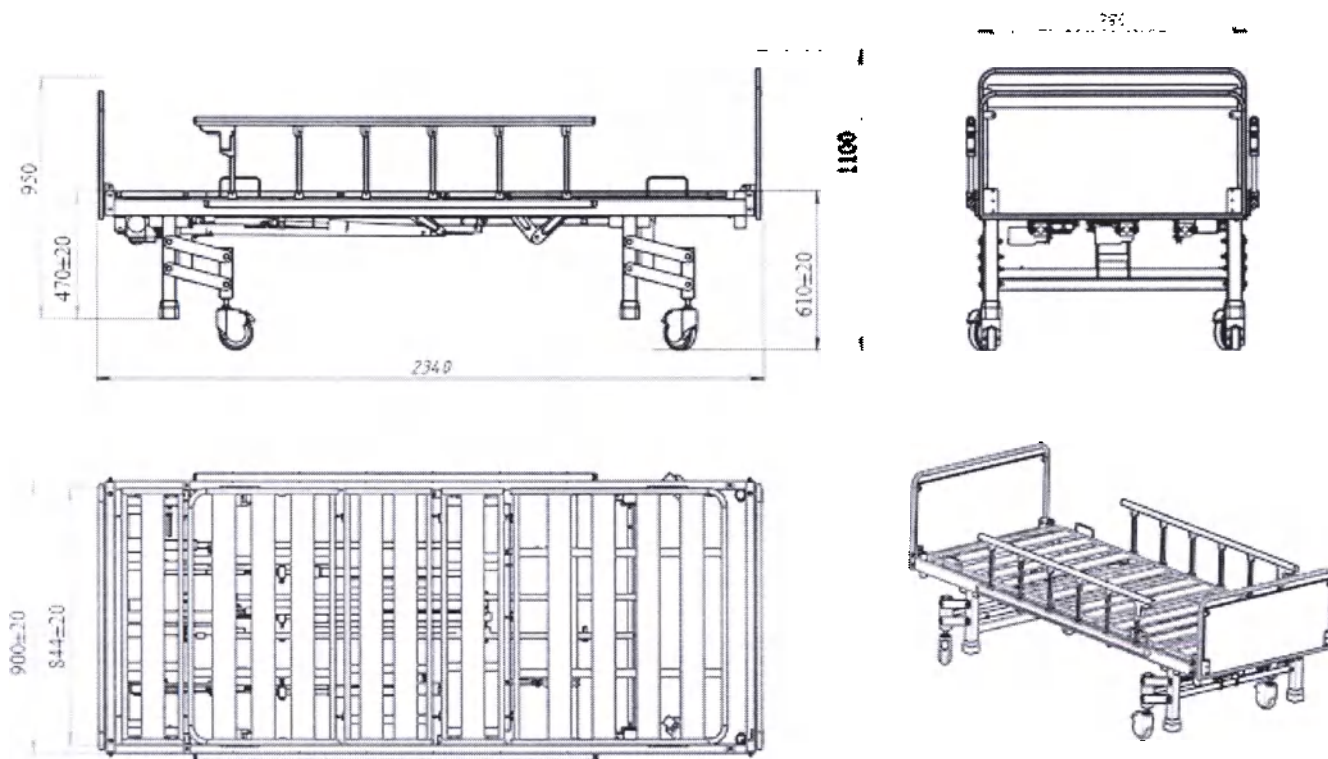

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 39093-1-2002, класс точности 1

Рис. 55 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Lmws

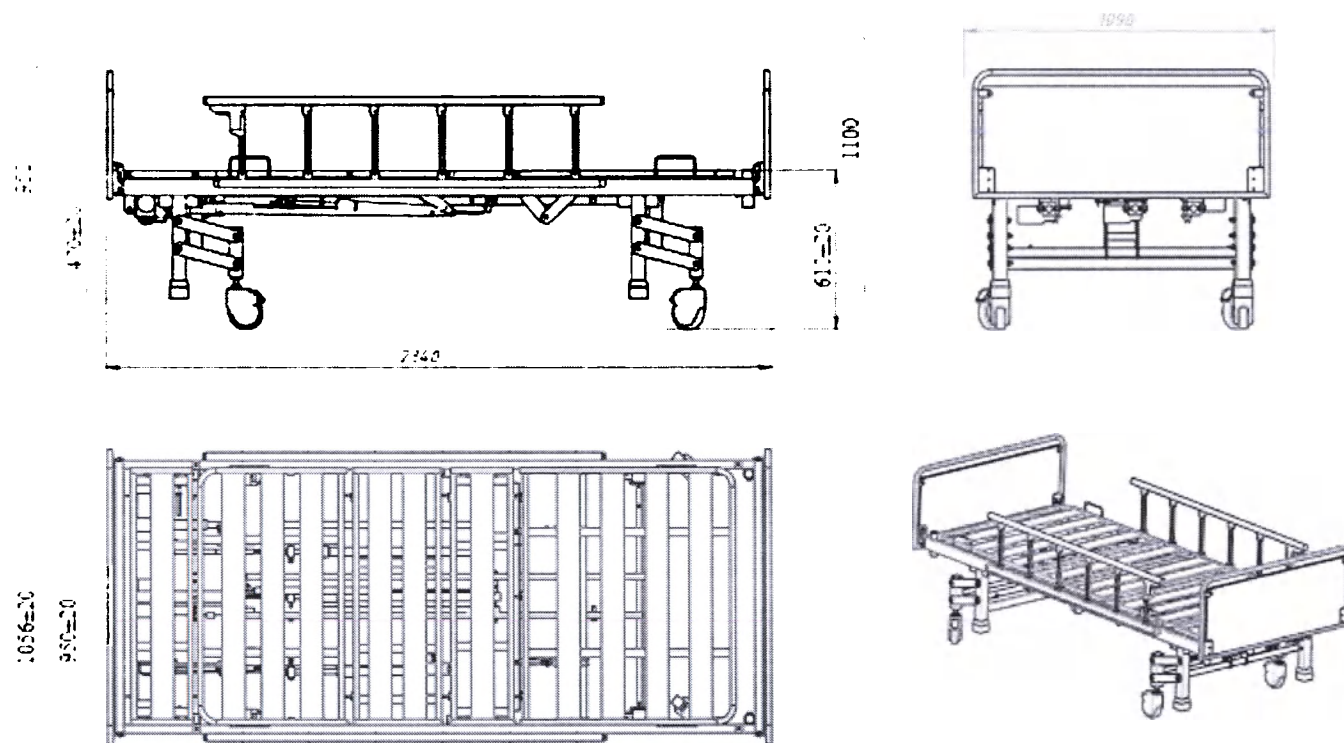


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893 I-2002, класс точности 8

Рис. 56 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Umws

Характеристика	Значение			
	Barry MBE-3Smwp, Barry MBE-3Smws	Barry MBE-3Bmwp, Barry MBE-3Bmws	Barry MBE-3Lmwp, Barry MBE-3Lmws	Barry MBE-3Umwp, Barry MBE-3Umws
Тип основания	S - стандартное	B - широкое	L - удлиненное	U - универсальное
Высота от пола до матрасного основания кровати в крайнем верхнем положении (без учета высоты матраса), мм	610±20	610±20	610±20	610±20
Высота от пола до матрасного основания кровати в крайнем нижнем положении, мм	470±20	470±20	470±20	470±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1980±20	1980±20	2220±20	2220±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	844±20	950±20	844±20	950±20
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	1056±20	900±20	1056±20

Высота с учетом изголовья, не более мм	950	950	950	950
Высота кровати с учетом изножья и изголовья в крайнем верхнем положении, не более мм	1100	1100	1100	1100
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	193	197	197	201
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	327	331	331	335
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	85	85	85	85

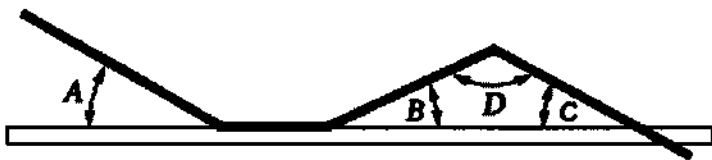Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	160	160	160	160
Энергопотребление, ВА, не более	260	260	260	260
Количество секций, шт.	4	4	5	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная			
Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)				
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)			

Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)			
Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)			
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)			
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления			
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный			
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	790×950×25	780×844×25	790×950×25
Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×950×25	230×950×25	230×844×25
Размер промежуточной секции матрасного	320×844×25	320×950×25	320×844×25	320×950×25

основания Д×Ш×В, не более мм				
Размер ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×950×25	540×844×25	540×950×25
Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	-	-	230×844×25	230×950×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%			
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ			
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4			
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B			

Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2120×990×950	2120×1090×950	2340×990×950	2340×1090×950
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	1950	1950	1950	1950
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	86	90	90	95
Общая масса кровати, не более кг	91	95	95	100
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории AP или APG. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.				

7.1.8 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-3Smpp, Barry MBE-3Bmpp, Barry MBE-3Lmpp, Barry MBE-3Umpp, Barry MBE-3Smpr, Barry MBE-3Bmpr, Barry MBE-3Lmpr, Barry MBE-3Umps



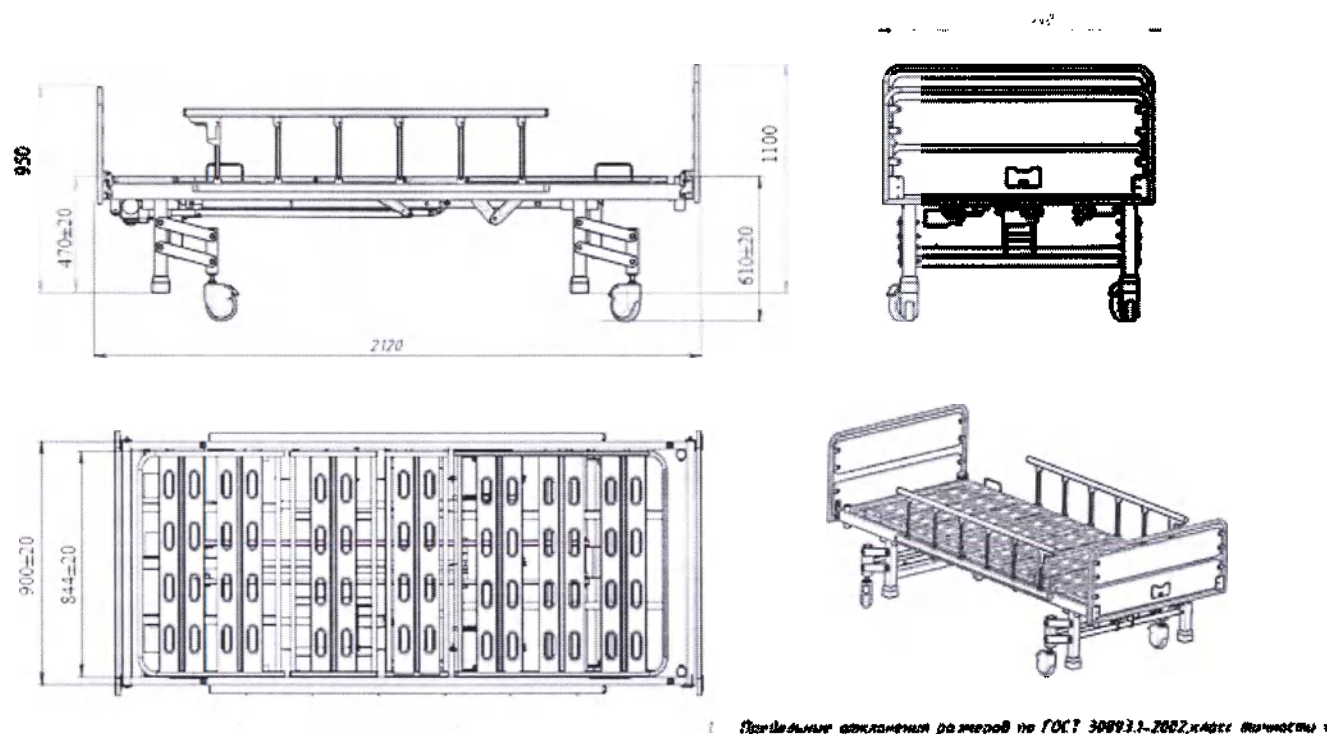


Рис. 57 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Smpp

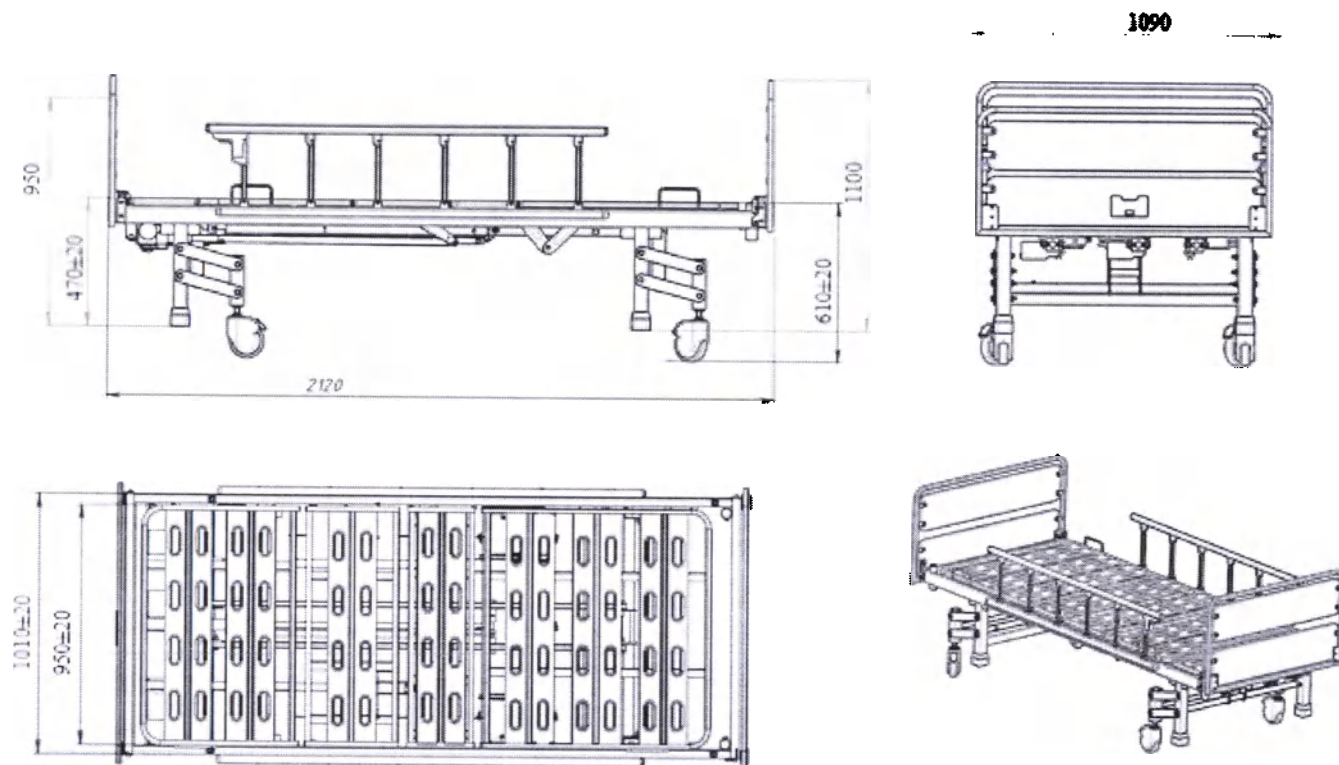

† Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности 4

Рис. 58 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-3Bmp

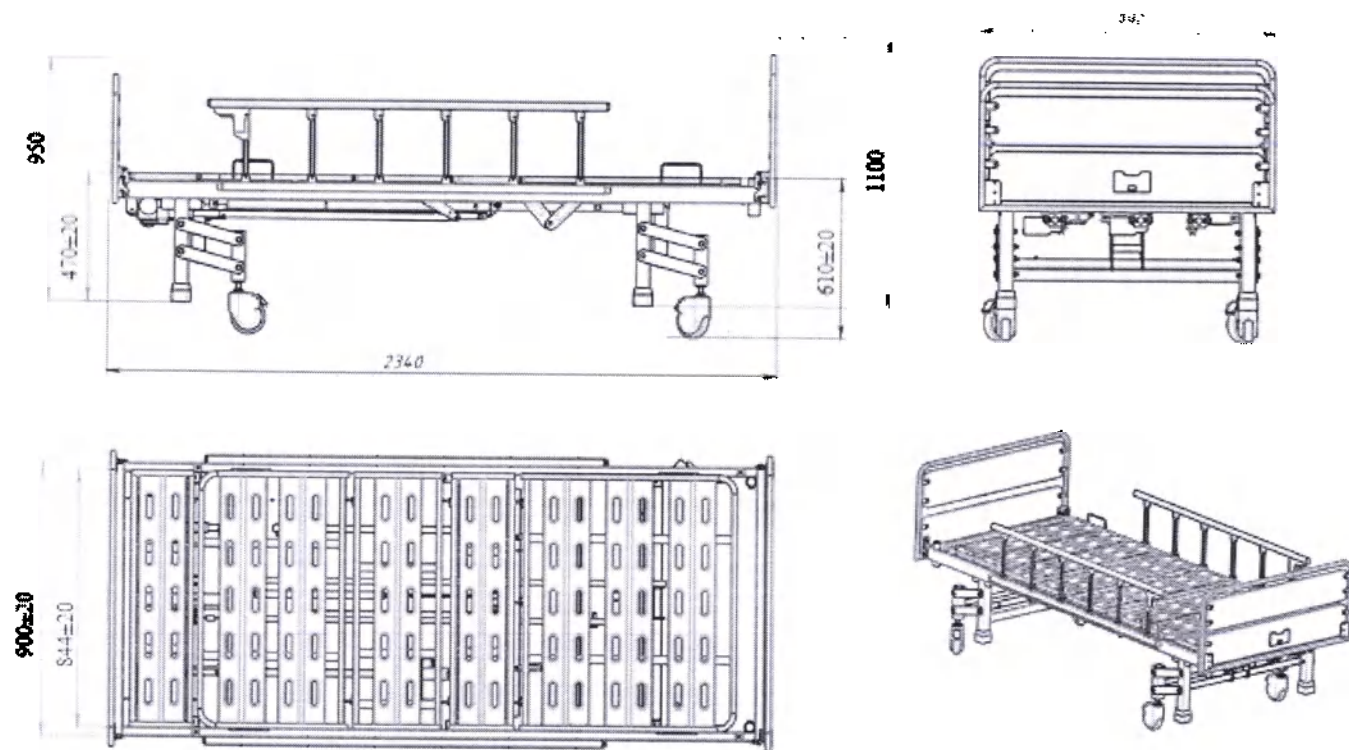

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности v

Рис. 59 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Lmpp


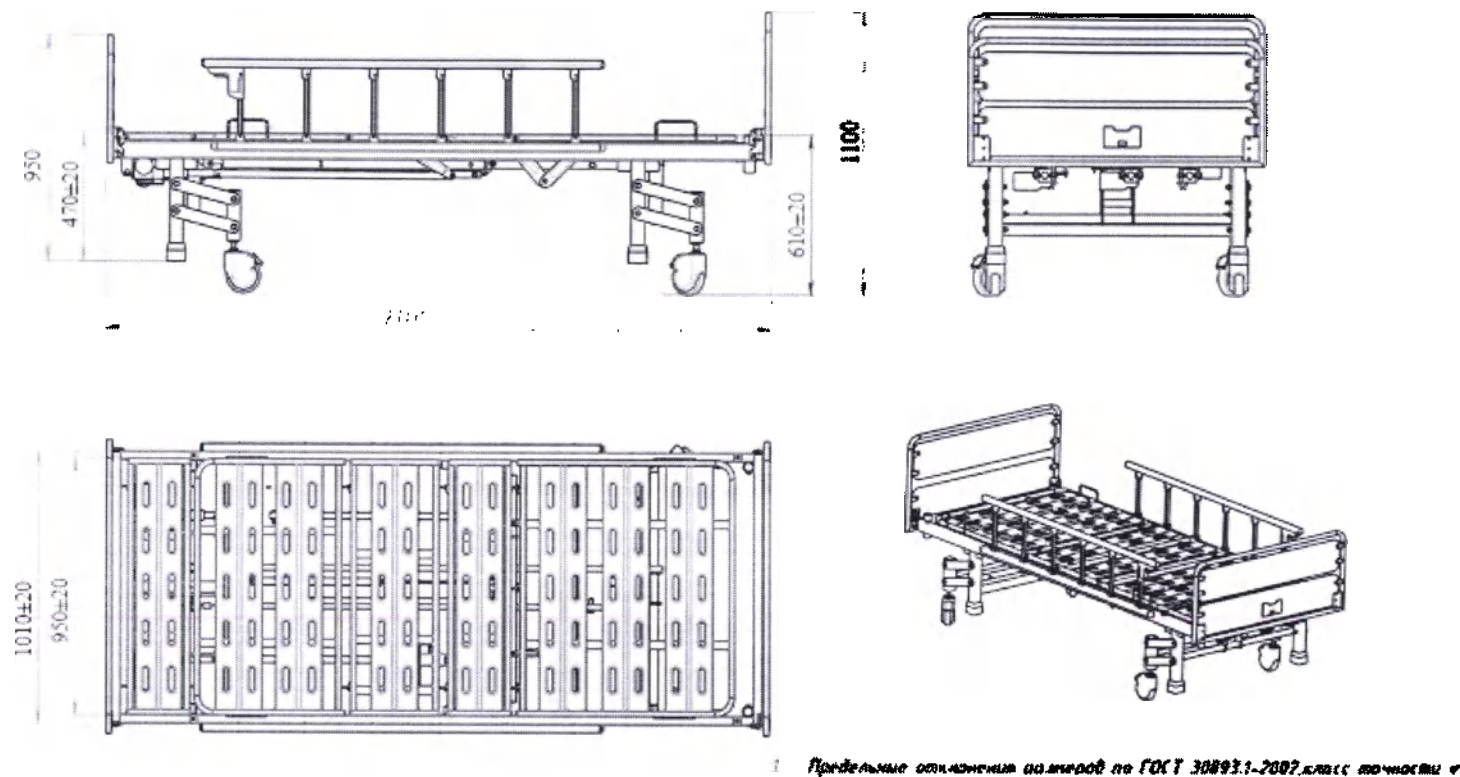


Рис. 60 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Вагу, вариант исполнения Вагу МВЕ-3Ump

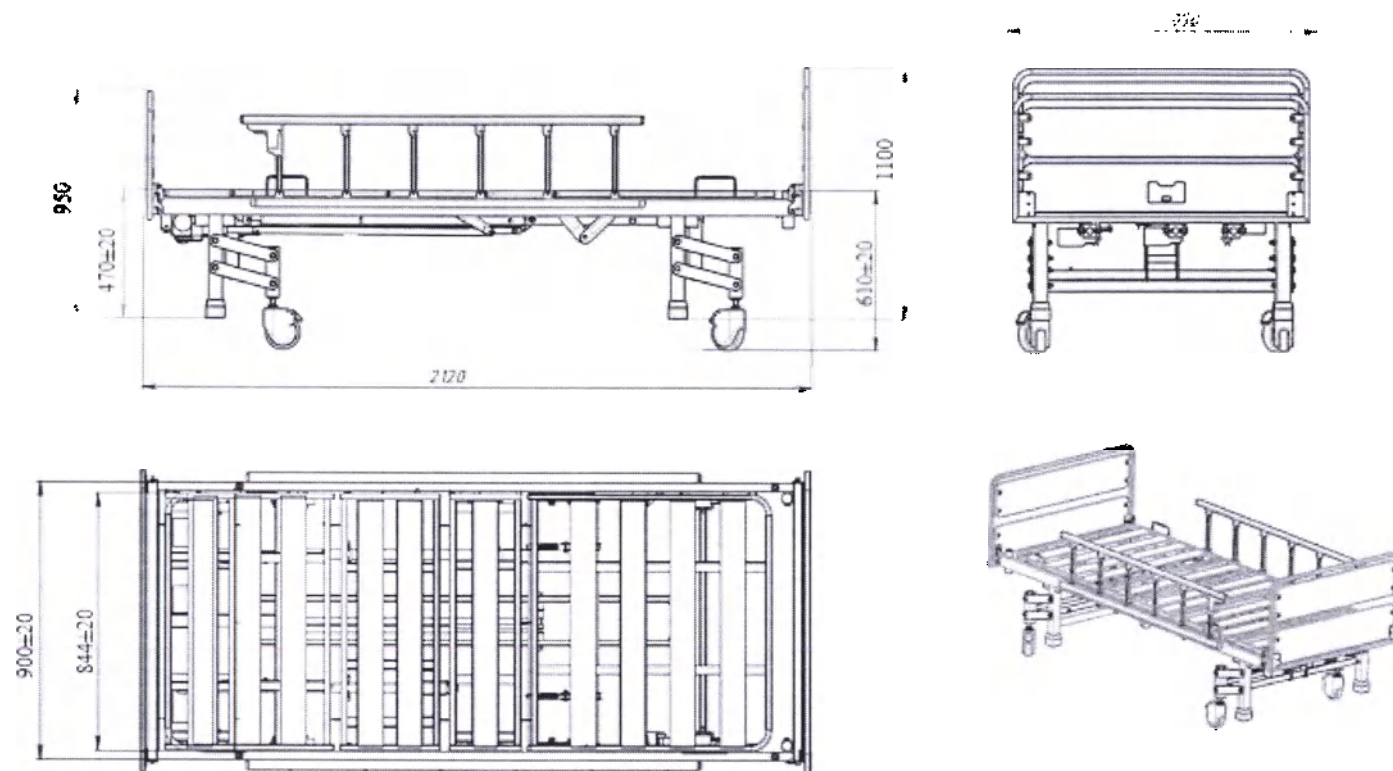

Габаритные размеры по ГОСТ 9093.1-2002, класс точности А

Рис. 61 Габаритные размеры кровати медицинской функционально электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-3Smp



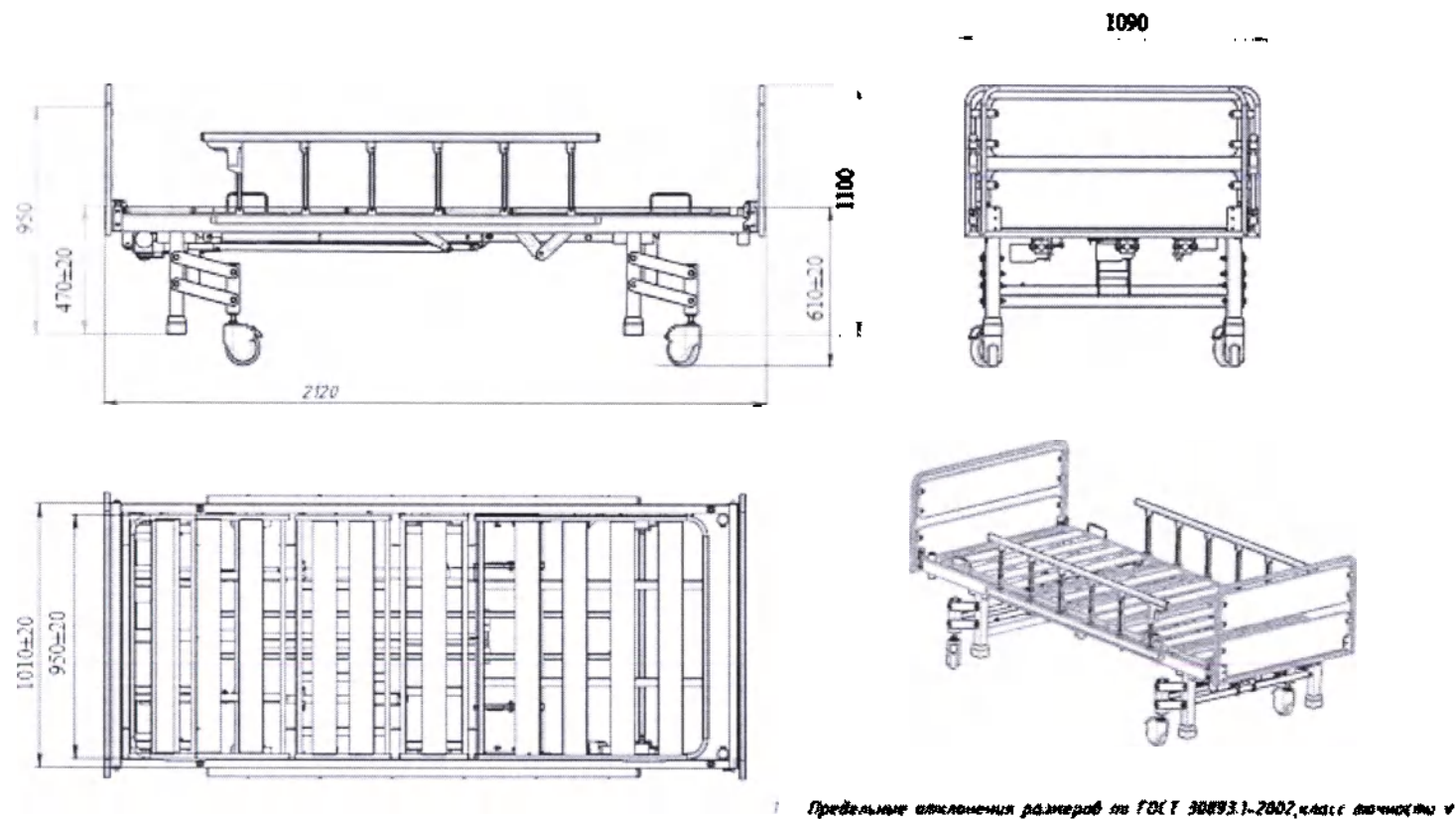


Рис.62 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bary, вариант исполнения Bary MBE-3Vmp

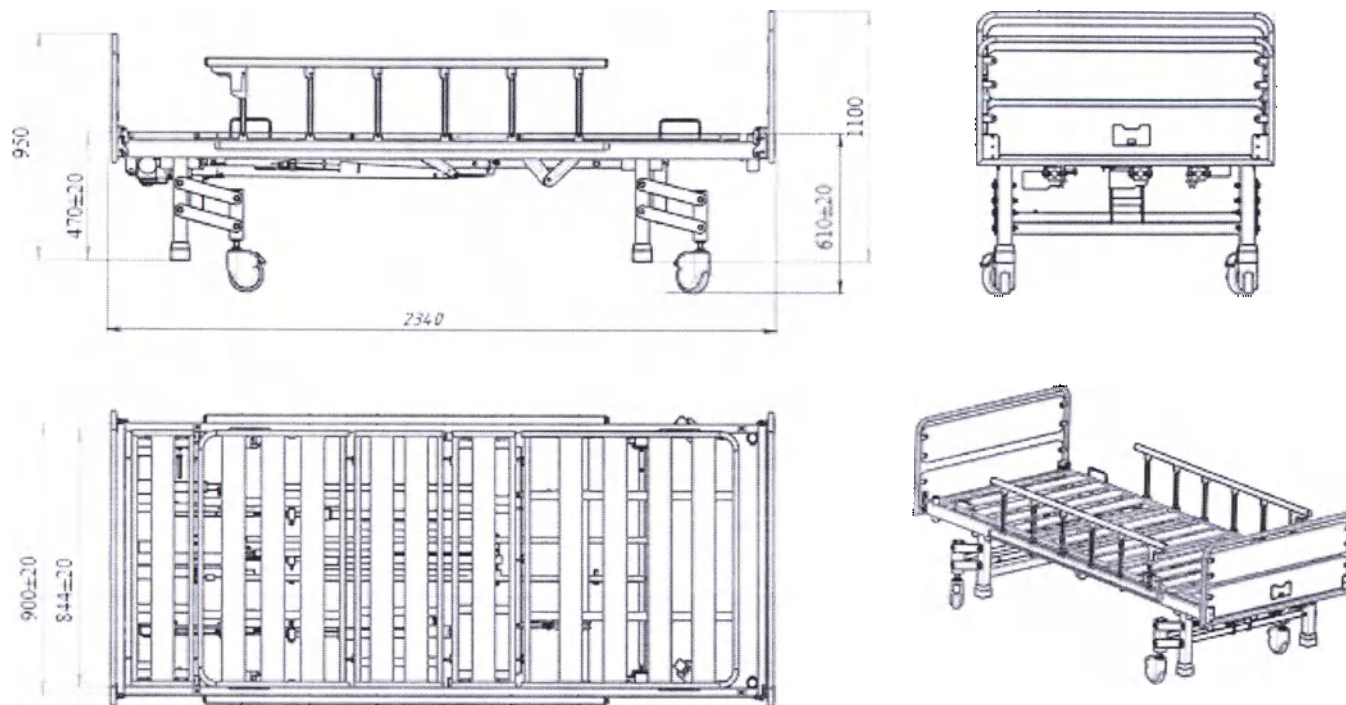

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30093-2002, класс точности ч

Рис. 63 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Вагу, вариант исполнения Вагу МВЕ-3Lmpz

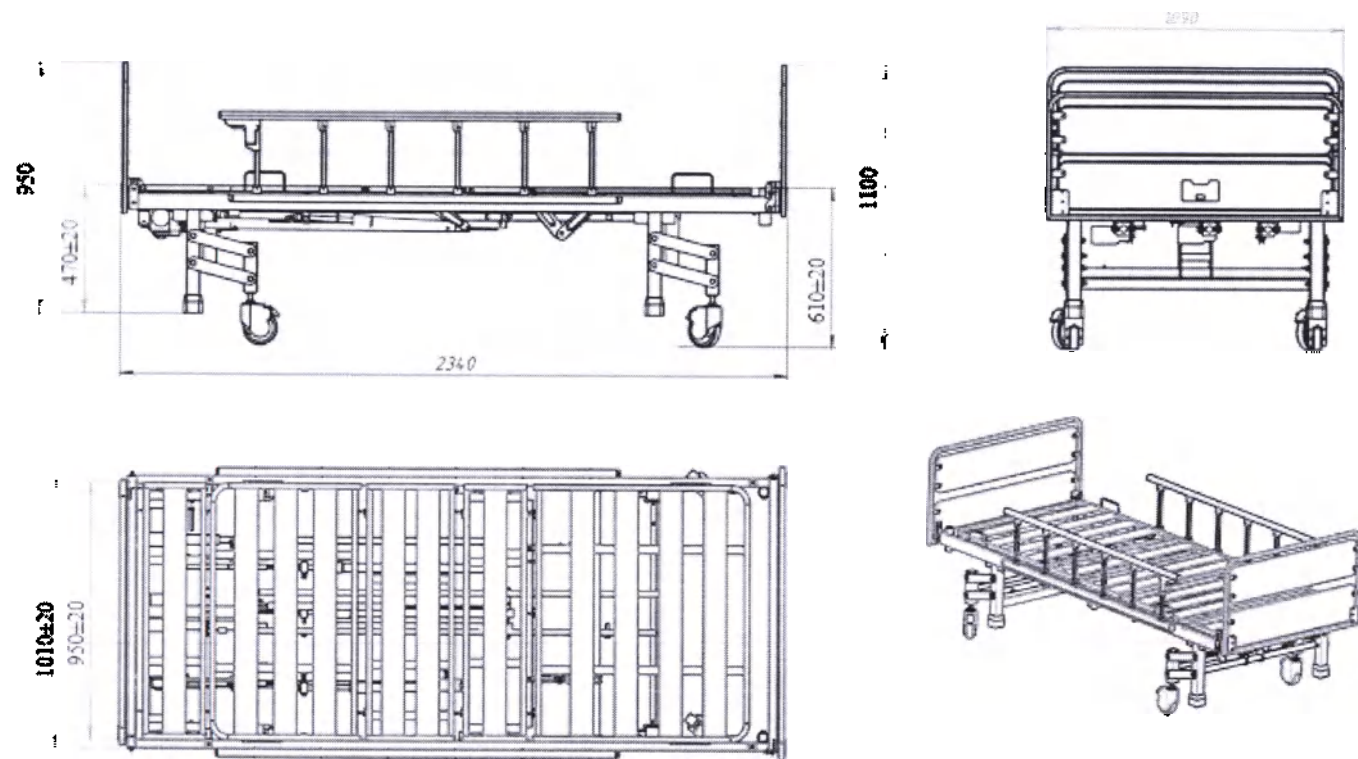


† Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, класс точности B

Рис. 64 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Bary, вариант исполнения Bary MBE-3Umpz

Характеристика	Значение			
Наименование модели	Barry MBE-3Smpp, Barry MBE-3Smps	Barry MBE-3Bmpp, Barry MBE-3Bmps	Barry MBE-3Lmpp, Barry MBE-3Lmps	Barry MBE-3Umpp, Barry MBE-3Umps
Тип основания	S - стандартное	B - широкое	L - удлиненное	U - универсальное
Высота от пола до матрасного основания кровати в крайнем верхнем положении (без учета высоты матраса), мм	610±20	610±20	610±20	610±20
Высота от пола до матрасного основания кровати в крайнем нижнем положении, мм	470±20	470±20	470±20	470±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1980±20	1980±20	2220±20	2220±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	844±20	950±20	844±20	950±20
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	1010±20	900±20	1010±20

Высота с учетом изголовья, не более мм	950	950	950	950
Высота кровати с учетом изножья и изголовья в крайнем верхнем положении, не более мм	1100	1100	1100	1100
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами, Н	193	197	197	201
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	327	331	331	335
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	85	85	85	85

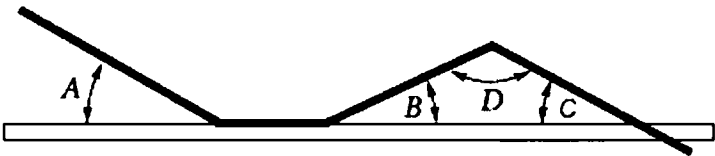Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	160	160	160	160
Энергопотребление, ВА, не более	260	260	260	260
Количество секций, шт.	4	4	5	5
Регулируемые секции	Спинная, промежуточная, ножная			
Схема углов регулируемых секций (А - Спинная секция, В - Тазобедренная секция, D - Промежуточная секция, С - Ножная секция)				
Угол регулировки наклона спинной секции	от 0° до 75° (не менее)			
Угол регулировки наклона промежуточной секции	от 0° до 35° (не менее)			

Угол регулировки сгиба промежуточной и ножной секции	от 125° до 145° (не менее)			
Угол регулировки наклона ножной секции	от 0° до 20° (не менее)			
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления			
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный			
Размер спинной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	780×844×25	790×950×25	780×844×25	790×950×25
Размер тазобедренной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	230×844×25	230×950×25	230×950×25	230×844×25
Размер промежуточной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	320×844×25	320×950×25	320×844×25	320×950×25

Размер ножной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	540×844×25	540×950×25	540×844×25	540×950×25
Размер неподвижной ножной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	-	-	230×844×25	230×950×25
Высота рамы кровати, не более мм	70	70	70	70
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц ±10%			
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ			
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4			
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B			
Общие габаритные размеры, Д×Ш×В, (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2120×990×950	2120×1090×950	2340×990×950	2340×1090×950

Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	2500	2500	2500	2500
Вес (без съемных приспособлений), не более кг	86	90	90	95
Общая масса кровати, не более кг	91	95	96	100
Кровать предназначена для продолжительного режима работы. В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей. Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа. Не является изделием категории AP или APG. Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения. Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.				

7.1.9 Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями, вариант исполнения: Barry MBE-2Kps, Barry MBE-2Kcs, Barry MBE-2Kws, Barry MBE-2Kmps, Barry MBE-2Kmws



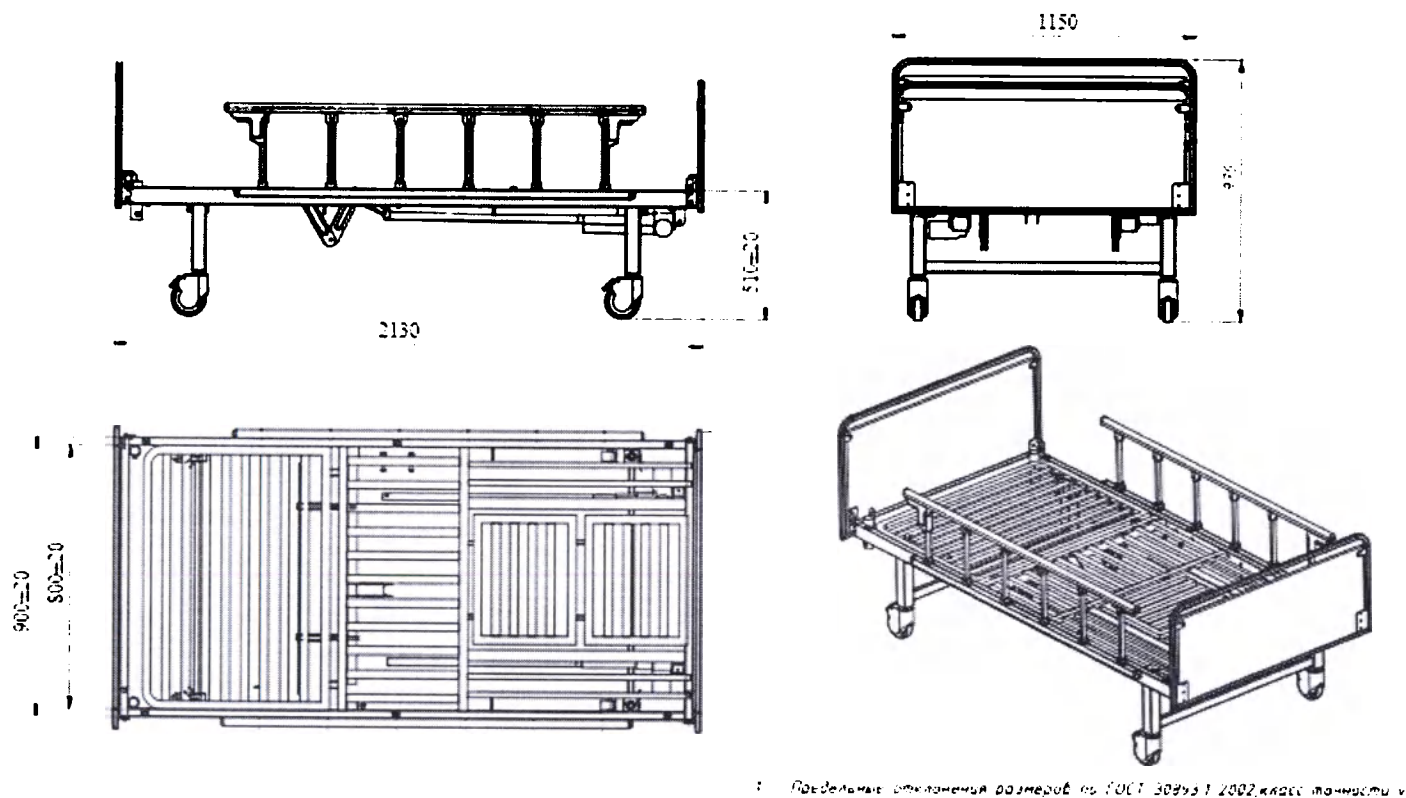


Рис. 65 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Kmws

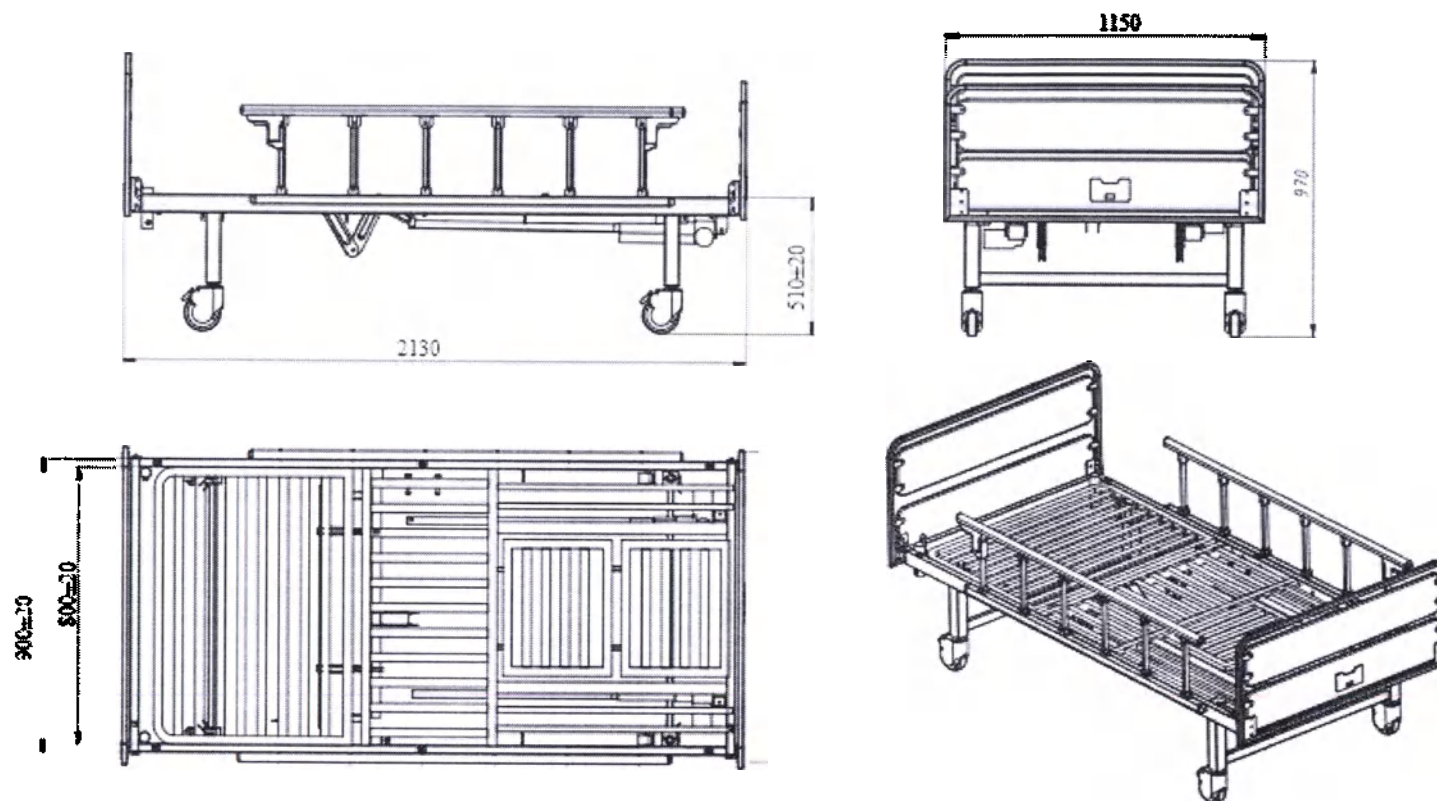


1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, класс точности ч

Рис. 66 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Kmps

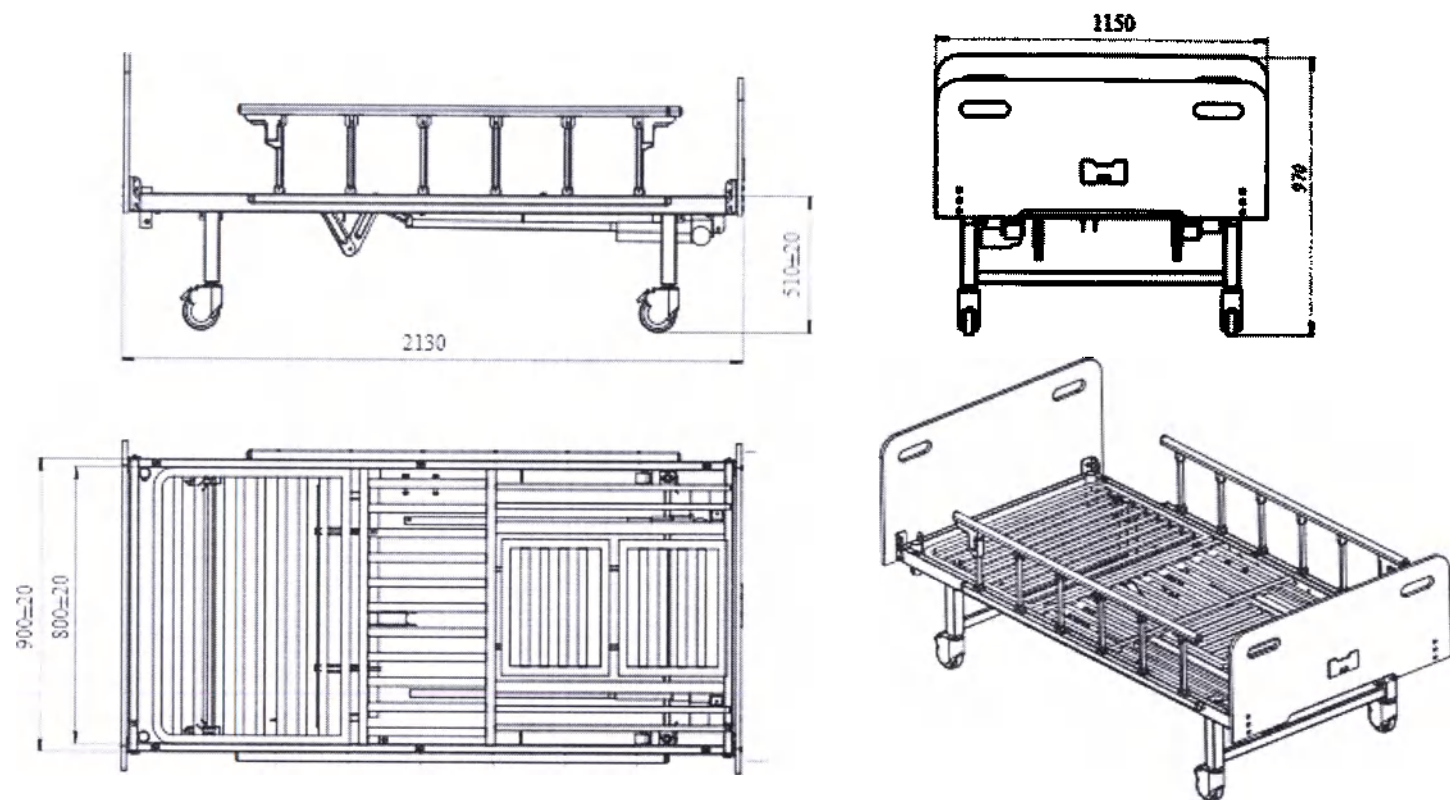


† Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1:2002, класс точности в

Рис. 67 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Barry, вариант исполнения Barry MBE-2Kw

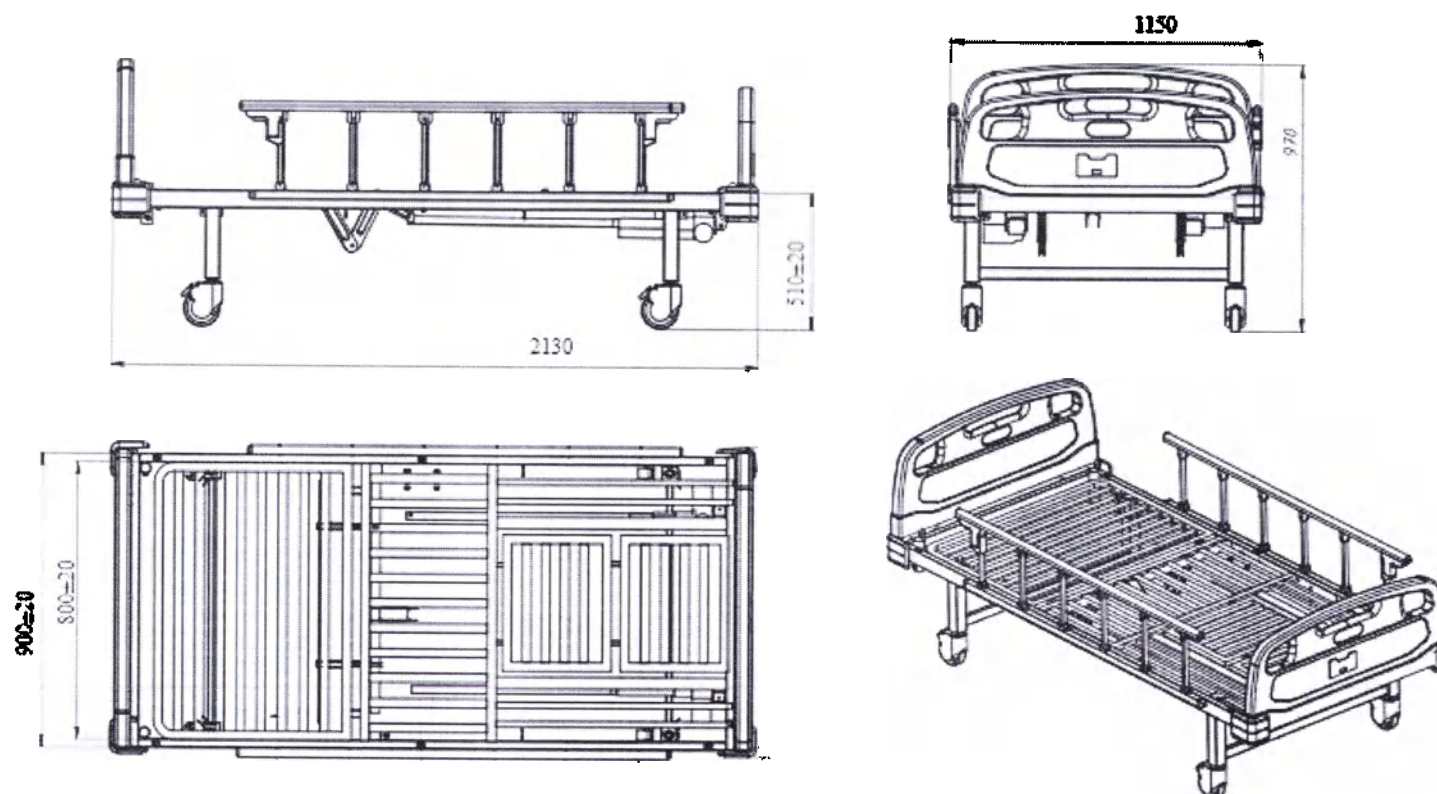

1 Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30693.1-2002, класс точности v

Рис. 68 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggu, вариант исполнения Baggu MBE-2Kps

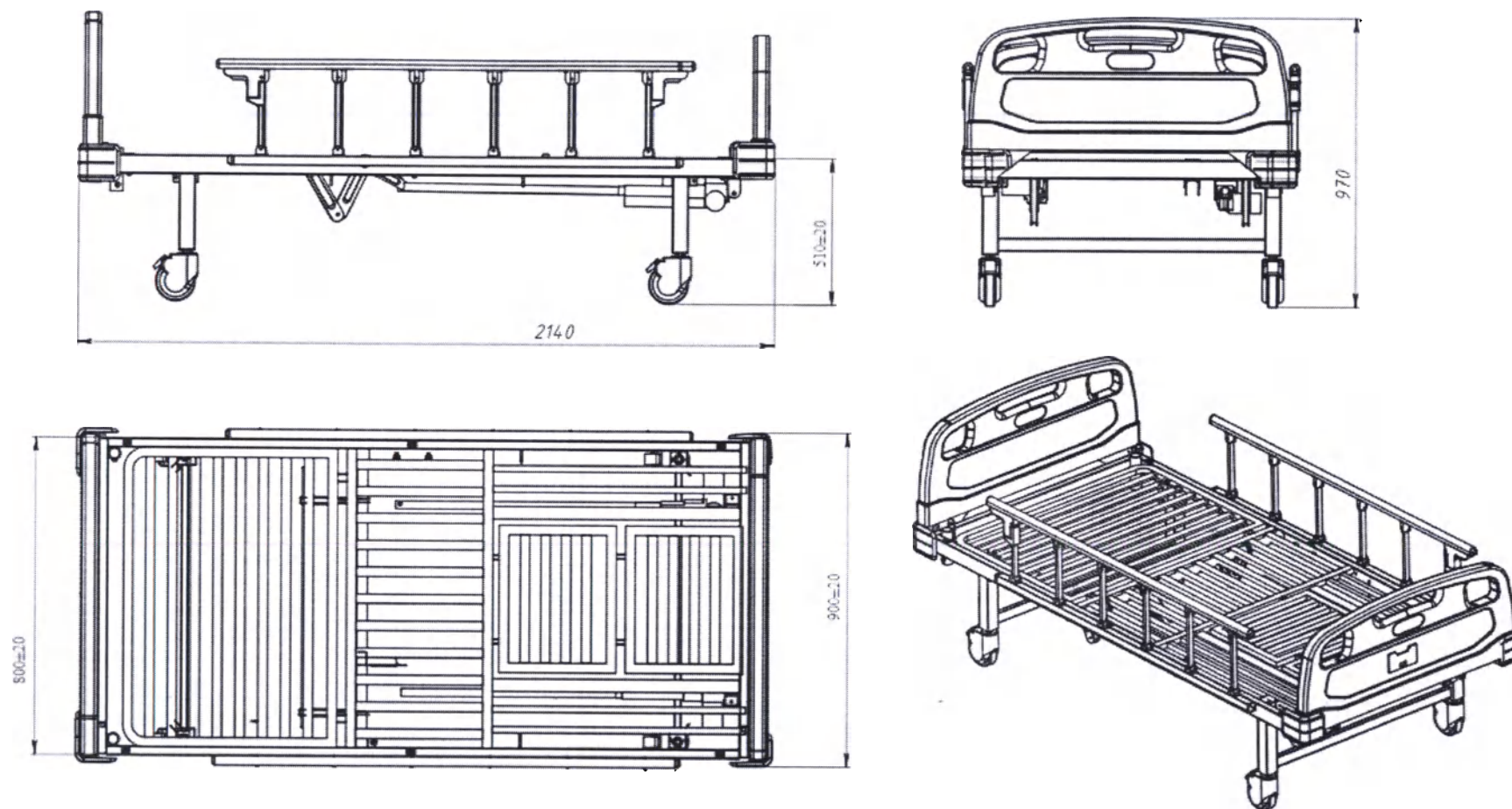

1. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1-2002, класс точности γ

Рис. 69 Габаритные размеры кровати медицинской функциональной электрической Baggy, вариант исполнения Baggy MBE-2Kcs

Характеристика	Значение				
Наименование модели	Barry MBE-2Kps	Barry MBE-2Kcs	Barry MBE-2Kws	Barry MBE-2Kmps	Barry MBE-2Kmws
Тип основания	К - кардио				
Высота от пола до матрасного основания кровати, (без учета высоты матраса), мм	510±20	510±20	510±20	510±20	510±20
Длина матрасного основания кровати, мм	1970±20	1970±20	1970±20	1970±20	1970±20
Ширина матрасного основания кровати, мм	800±20	800±20	800±20	800±20	800±20
Ширина матрасного основания кровати между боковых ограждений, мм	900±20	900±20	900±20	900±20	900±20
Высота с учетом изголовья, не более мм	970	970	970	970	970
Максимально допустимая нагрузка, (предельная рабочая нагрузка), кг	250	250	250	250	250
Максимальное усилие перемещения с	193	197	197	201	193

заблокированными тормозами, Н					
Максимальное усилие перемещения с заблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	327	331	331	335	327
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (усилие передвижения), Н	85	85	85	85	85
Максимальное усилие перемещения с разблокированными тормозами (включая предельную рабочую нагрузку), Н	160	160	160	160	160
Энергопотребление не более, ВА	260	260	260	260	260
Количество подвижных секций, шт.	3	3	3	3	3
Регулируемые секции	Спинная и ножная				

Угол регулировки наклона спинной секции (угол А)	от 0° до 75° (не менее)				
Угол регулировки наклона ножной секции (угол С)	от 0° до 25° (не менее)				
Тип управления углом наклона секций	Электропривод- пульт управления				
Тип механизма регулировки положения секций	Электроподъемный				
Размер спинной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	700×800×35	700×800×35	700×800×35	700×800×35	700×800×35
Размер тазобедренной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	480×900×65	480×900×65	480×900×65	480×900×65	480×900×65
Размер промежуточной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	340×450×35	340×450×35	340×450×35	340×450×35	340×450×35
Размер ножной секции матрацного основания Д×Ш×В, не более мм	340×440×30	340×440×30	340×440×30	340×440×30	340×440×30

Размер неподвижной ножной секции матрасного основания Д×Ш×В, не более мм	280×440×35	280×440×35	280×440×35	280×440×35	280×440×35
Высота рамы кровати, не более мм	80	80	80	80	80
Напряжение электропитания	220В ±10%, 50/60 Гц±10%				
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБ				
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IPX4				
Защита от поражения электрическим током	класс I тип B				
Общие габаритные размеры, Д×Ш×В (при приведении всех секций в горизонтальное положение), не более мм	2130×1150×970	2140×940×970	2130×1150×970	2130×1150×970	2130×1150×970
Высота с учетом устройства для подтягивания в эксплуатации, не более мм	2100	2100	2100	2100	2100

Вес (без съемных приспособлений), не более кг	88	89	89	89	90
Общая масса кровати, не более кг	91	95	95	95	100

Кровать предназначена для продолжительного режима работы.

В случае отключения электроэнергии, предусмотрено дополнительное обеспечение функций поднятия и опускания секций кровати при помощи регулировки от блока управления, снабженного встроенной аккумуляторной батареей.

Время работы от встроенной батареи не менее 1 часа.

Не является изделием категории AP или APG.

Кровать не содержит лекарственных субстанций и материалов животного происхождения.

Кровать функциональная не предназначена для проведения рентгенодиагностики.

8. Маркировка медицинского изделия

Поставка кровати осуществляется в разобранном состоянии. Сборка и монтаж производится на месте квалифицированным персоналом. Маркировка наносится в виде таблички размером 80×50мм* на корпус рамы кровати под изголовьем Кровати медицинской функциональной электрической Barry для всех вариантов исполнения, в виде таблички размером 80×50 мм* на корпус столика прикроватного и содержит следующую информацию:

Кровать медицинская функциональная электрическая Barry, вариант исполнения Barry MBE-3Uws			
 SN	XXXXXXXXXXXXXXXX	  IPX4	 = 250 кг
 REF	XXX	Условия эксплуатации:  40°C  70 %  106,7 кПа  84 мПа	
Питание: 220В 50 Гц ~ 24В Потребляемая мощность: 260 ВА		ООО «АРИДЕС», ул. Раффи 111, Малаatia – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения	
		30.04.2021	
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXX			

*Примечание: Производитель оставляет за собой право изменить указанные размеры.

Маркировка принадлежностей или составных частей кровати наносится в виде маркировочной таблицы на корпус изделия размером (Ш×В) 70×50 мм*, за исключением электрически-зависимых составных частей.

Для электрически-зависимых составных частей, таких как блоки управления, пульты управления и электродвигатели размер (Ш×В) 55×40 мм*.

В случае, если ли нет возможности нанесения маркировки на корпус изделия, маркировка наносится на упаковку изделия или вкладывается в упаковку вместе с изделием.

Маркировка принадлежностей для Кровати медицинской функциональной электрической Ваггу:

Матрац секционный для кровати медицинской функциональной электрической Ваггу, для варианта исполнения Ваггу MBE-3Ums			
SN XXXXXXXXXXXXXXXX		 	
REF XXXX		 2 00009381366470	
		 ООО «АРИДЕС» ул. Раффн 111, Мелатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения	
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXX		 30.04.2021	

Для принадлежности «Устройство для подтягивания» кровати предусмотрена дополнительная маркировка. Маркировочный значок наносится в виде наклейки на корпус изделия размером 50×80мм*.

Маркировка «Устройство для подтягивания» для Кровати медицинской функциональной электрической Barry:


 max 90 kg	Максимальная нагрузка на устройство не более: 90 кг
--	---

*Примечание: Производитель оставляет за собой право изменить указанные размеры.


Маркировка «Пульт управления кровати», 40×40 мм:

		Пульт управления кровати для Кровати медицинской функциональной электрической Barry	
модель: для X двигательных Barry MBE			
REF XXXX		SN XXXXXXXXXXXXXXXX	
ПУ№			XX/XX/XXXX
 5°C — 40°C  30% — 70%  84 кПа — 106,7 кПа			
	ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		
Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, ул. Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru СИМС-2			
 7 5000988666470		Срок службы: 5 лет	 IPX4

Маркировка «Электропривод», 55×40 мм:

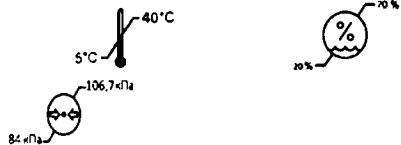		Электропривод для регулировки угла наклона _____ секции для Кровати медицинской функциональной электрической Ваггу	
модель: XXXXXX-XXX/XXX		IP65	Максимальная нагрузка: 6000H
 SN XXXXXXXXXXXXXXXX	 REF XXXX	Напряжение вх.: DC 24В	
Выходная мощность: 60 Вт		Рабочий ход (S): 210 мм	
		Рабочий цикл: Макс. 10 мин, 2 мин. ВКЛ. / 18 мин. ВЫКЛ.	
 ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		 XX/XX/XXXX	
Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, ул. Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru 		 РУ№	
			
		Срок службы: 5 лет	

Маркировка «Блок управления», 55×45 мм:

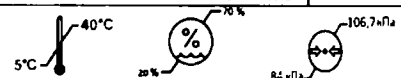		Блок управления для Кровати медицинской функциональной электрической Ваггу	
модель: XXXXXX-X		Напряжение питания от сети: 110-230V AC, 50/60Hz	
 SN XXXXXXXXXXXXXXXX	 REF XXXX	Напряжение вых.: 24V DC	IPX6
		Рабочий цикл: Макс. 10 мин, 2 мин. ВКЛ. / 18 мин. ВЫКЛ.	
 ARIDES LLC 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia		 XX/XX/XXXX	
Уполномоченный представитель производителя:		 РУ№	
			

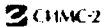
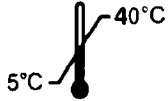
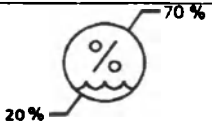
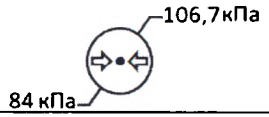
ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, ул. Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru 	Срок службы: 5 лет
--	--------------------

Таблица символов, которые могут быть применены при маркировке изделия

№п/п	Графический символ	Описание значения	Комментарий /Перевод при необходимости						
1.		Торговый знак предприятия -изготовителя							
2.	Кровать медицинская функциональная электрическая Barry	Наименование или обозначение типа (вида) изделия;	Для принадлежности (составной части изделия): наименование: YYYYYYYYYY Например: Столик прикроватный для Кровати медицинской функциональной электрической Barry						
3.	Barry MBE-xXxx/ Barry MBE-xXxxx	Наименование или обозначение модификации (варианта исполнения) изделия	Для обозначения модификации (варианта исполнения) изделия медицинских функциональных кроватей используются следующие буквенно-цифровые значения Barry MBE-xXxx или Barry MBE-xXxxx, где: <table><tr><th>№п/п (позиция в наименовании модификации слева направо)</th><th>Буква, цифра</th><th>Обозначение</th></tr><tr><td>1</td><td>Barry MBE</td><td>Barry M- medical(медицинская), B-bed(кровать), E- electric (электрическая)</td></tr></table>	№п/п (позиция в наименовании модификации слева направо)	Буква, цифра	Обозначение	1	Barry MBE	Barry M- medical(медицинская), B-bed(кровать), E- electric (электрическая)
№п/п (позиция в наименовании модификации слева направо)	Буква, цифра	Обозначение							
1	Barry MBE	Barry M- medical(медицинская), B-bed(кровать), E- electric (электрическая)							

			2	x	2-количество электроприводов - регулировка спинной и бедренно-ножной и ножной секций
			3	X	3-количество электроприводов - регулировка спинной и бедренно-ножной и ножной секции, высоты положения основания матрасного кровати
			4	x	Тип основания S - стандартное B - широкое L - удлиненное U - универсальное K - кардио
			5	x	Тип изголовья и изножья р - пластик, w-мдф, xx - пластик, xx - металл/пластик mw - металл/лдсп
4.	SN	Идентификационный (серийный/заводской) номер			р-панельное основание s- ламельное основание

5.		Каталожный номер	
6.	Питание: 220В 50 Гц  24В Потребляемая мощность: 260 ВА	Характеристики питания: Номинальное напряжение сети питания переменного тока, В; частота переменного тока питающей сети, Гц; напряжение питания от внутреннего источника, В; потребляемая мощность при номинальном режиме работы, ВА	 - напряжение постоянного тока
7.		Обратиться к инструкции по эксплуатации	
8.		Особая утилизация	
9.	IPX4	Классификация защиты от опасного проникания воды или твердых частиц	X - защита от проникновения твердых частиц 4 - защита от попадания брызг воды
10.		Рабочая часть типа В	
11.		Дата изготовления изделия (месяц / год в формате xx/xxxx);	
12.	 = XX кг 	Предельная рабочая нагрузка, в кг для медицинского изделия, принадлежности или его составной части (указывается при необходимости)	Предельная рабочая нагрузка, в кг для кровати  = 250 кг 

13.		Температурный диапазон эксплуатации и хранения	
14.		Диапазон влажности эксплуатации и хранения	
15.		Ограничение атмосферного давления эксплуатации и хранения	
16.		Информация об изготовителе: Наименование предприятия -изготовителя Адрес предприятия -изготовителя	ООО «АРИДЕС» ул. Раффи 111, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения
17.		Штрих-код используется для идентификации информации о предприятии-изготовителе и информации о товаре, месте производства	
18.	РУ № / Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXX	Номер регистрационного удостоверения	
Дополнительные символы, которые может нанести предприятие -изготовитель при необходимости и по требованию заказчика			
19.		Специальный знак обращения продукции ЕАЭС	(при необходимости предприятие -изготовитель может ввести) * Декларирование в рамках таможенных регламентов таможенного союза

9. Упаковка, транспортировка и маркировка упаковки медицинского изделия

Для сохранения работоспособности кровати необходимо соблюдать в процессе хранения или транспортировки следующие условия:

• Условия транспортировки:

Температура: от -40°C до +50°C

Относительная влажность: 20 - 70 % (без конденсации)

Атмосферное давление: 60 кПа – 106,7 кПа

• Условия хранения:

Температура: от +5°C до +40°C

Относительная влажность: 20 - 70 % (без конденсации)

Атмосферное давление: 84 кПа – 106,7 кПа

• Условия эксплуатации:

Температура: от +5°C до +40°C

Относительная влажность: 20 - 70 % (без конденсации)

Атмосферное давление: 84 кПа – 106,7 кПа

Упаковка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 51474 и технической документацией Производителя.

При хранении необходимо отсоединить все электрозависимые части от электросети, обеспечить защиту от пыли, солнечного света, агрессивных газов и сред. Помещение, в котором хранят кровати должно быть хорошо вентилируемым. Рекомендуются хранение кровати и столика прикроватного в оригинальной упаковке.

Срок хранения без использования не более 8 лет для кровати и столика прикроватного, срок хранения аккумуляторной батареи для блока управления не более 2 лет.

Каждая кровать должна быть упакована в транспортную (потребительскую) упаковку (тару). Перед упаковкой собранная рама с основанием кровати, должна быть разъединена с колесными стойками, изголовьем и изножьем, боковыми ограждениями. Так же отсоединяются колеса самоориентирующееся с тормозом, стойка внутривенных вливаний, устройство для подтягивания, пульт управления кровати, столик сервисный, растомат, матрац с чехлом водонепроницаемым или без него, держатель принадлежностей. Держатель документов остается прикрепленным к изножью. Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции, электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции, электропривод для регулировки высоты положения основания матраца кровати и блок управления остаются прикрепленными на раме с основанием кровати. Комплект крепежных изделий остается на местах крепления всех составных частей (См. раздел по сборке кровати).

Все вышеуказанные составные части должны быть обернуты в прозрачную полиэтиленовую пленку ПНД(LDPE) марки «ЛПК», плотностью 925 кг/м³, толщиной 0,5 мм, производства ООО «Ленинградский Полиграфический Комбинат» (Россия) или аналогичную, далее уложены в коробку, габаритные размеры, не более: 2400×1100×400 мм. масса брутто, не более : 120 кг, масса нетто, не более 110 кг из пятислойного гофрокартона по ГОСТ Р 52901 марки «П-32», толщиной 7 мм, плотностью 150 г/м³, цвет бурый, производства ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» (Россия) или

аналогичного. Коробка заклеивается лентой полипропиленовой с липким слоем толщиной 0,6 мм, разрывная нагрузка 165 кгс марки «Логард», производства ООО «Логард» (Россия) или аналогичной. Далее закрепляется лентой полипропиленовой шириной не менее 15 мм, толщиной не менее 0,6 мм с нагрузкой на разрыв 180 кгс марки «ПП», производства ООО «ЛЕНТАПАК» (Россия) или аналогичной.

Столик прикроватный должен быть отдельно упакован в разобранном виде в прозрачную полиэтиленовую пленку ПНД(LDPE) марки «ЛПК», плотностью 925 кг/м³, толщиной 2 мм, производства ООО «Ленинградский Полиграфический Комбинат» (Россия) или аналогичную, далее помещен в отдельную транспортную (потребительскую) упаковку (тару), габаритные размеры, не более : 1000×900×1000 мм, масса брутто, не более 14 кг, масса нетто, не более 11 кг из гофрированного картона трехслойного по ГОСТ Р 52901 марки «Т-23» производитель ООО «ГофроАльянс» (Россия), толщиной: 3-4 мм, цвет: бурый, плотностью 0,12кг/м² или аналогичного. Коробка заклеивается лентой полиэтиленовой с липким слоем, толщиной не менее 45 мкм, марки «Логард», производства ООО «Логард» (Россия) или аналогичной по ГОСТ 20477-86.

При поставке кровати вместе со столиком прикроватным используется маркировка с указанием количества грузовых мест и порядковых номеров упаковок. В коробку с кроватью вкладывают упаковочный лист с указанием следующей информации: номер упаковочного листа, дата составления, количества грузовых мест и порядковый номер места, номер договора поставки, спецификация (комплект поставки), номер упаковщика по системе предприятия-изготовителя.

Составные части и принадлежности поставляемые отдельно должны быть отдельно (единично) упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку марки ПНД(LDPE) в прозрачную полиэтиленовую пленку ПНД(LDPE) марки «ЛПК», плотностью 925 кг/м³, толщиной 0,5 мм, производства ООО «Ленинградский Полиграфический Комбинат» (Россия) или аналогичную, на изделие наносится стикер-наклейка, размером не более 70×50 или далее (при необходимости) помещены в отдельную или групповую транспортную (потребительскую) упаковку (тару), габаритные размеры, не более: 1500×1500×1500 мм, масса брутто, не более 70 кг, масса нетто, не более 60 кг из гофрированного картона трехслойного по ГОСТ Р 52901 марки «Т-23» производитель ООО «ГофроАльянс» (Россия), толщиной: 3-4 мм, цвет: бурый, плотностью 0,12кг/м² или аналогичного. Коробка заклеивается лентой полиэтиленовой с липким слоем, толщиной не менее 45 мкм, марки «Логард», производства ООО «Логард» (Россия) или аналогичной по ГОСТ 20477-86. В случае, если групповая транспортная (потребительская) упаковка (тара) содержит несколько составных частей и принадлежностей, то на упаковку наноситься маркировка для каждой составной части и принадлежности. Если количество грузовых мест более одного, то указывается количество грузовых мест N и номер упаковки.






Изнутри коробки из гофрокартона могут дополнительно выложены упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 или гофрированным картоном по ГОСТ Р 52901, для предотвращения самопроизвольного перемещения изделия внутри упаковки при транспортировании. Неустановленные на изделие детали, документация Производителя, крепеж и пр., а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354, а затем помещены в транспортную упаковку вместе с кроватью.

Допускается изменение упаковки, не ухудшающее устойчивости к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

Кровати и принадлежности в упаковке транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

При транспортировке должна быть выполнена транспортная маркировка грузовых мест. Транспортная маркировка должна содержать наименование исполнения изделия, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, дополнительно наименование грузоотправителя и грузополучателя, число изделий (при групповой упаковке), год и месяц упаковывания, наименование организации-изготовителя, адрес места производства (с указанием страны производства), массы брутто и нетто грузового места в килограммах, габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота). На транспортировочную упаковку должны наноситься следующие этикетки и информационные знаки:

Маркировка упаковки кровати:

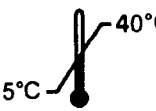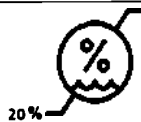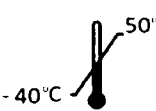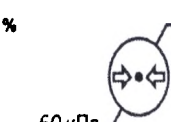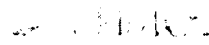	Кровать медицинская функциональная электрическая Barry	
Модель	Barry MBE-xXxx / Barry MBE-xXxxx	Размер (ДхШхВ), мм: ____х____х____
SN		Вес брутто, кг: _____
REF		Вес нетто, кг: _____
Условия хранения	  	
Условия транспортировки	  	
	____/20____	
	ARIDES LLC, 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	
	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru	
Регистрационное удостоверение	 2100098816664701	Количество грузовых мест ____

№ _____	Количество в упаковке _____ штук	Порядковый номер упаковки _____
		

Маркировка упаковки на Столик прикроватный:

	Столик прикроватный для Кровати медицинской функциональной электрической Barry	
для модели:	Barry MBE-xXxx / Barry MBE-xXxxx	
REF		
SN		Размер (ДхШхВ), мм: _____х_____х_____ Вес брутто, кг: _____ Вес нетто, кг: _____
Условия хранения	 40°C  70 %  106,7кПа 5°C 20% 84 кПа	
Условия транспортировки	 50°C  70 %  106,7кПа -40°C 20% 60 кПа	
	_____/20____	
	ARIDES LLC, 111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia	
	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru	
Регистрационное удостоверение № _____	 2 000988 666470 Количество в упаковке _____ штук	Количество грузовых мест _____ Порядковый номер упаковки _____
		




***Примечание:** Производитель оставляет за собой право изменить размеры этикеток
 Поставка кровати и столика прикроватного осуществляется в разобранном состоянии. Сборка
 и монтаж производится на месте квалифицированным персоналом. На транспортную упаковку
 рекомендуется вынести крупно дополнительно следующие информационные знаки:


Информационный знак	Описание	Обозначение
	Беречь от влаги	Медицинское изделие необходимо защищать от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно	Медицинское изделие может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно
	Верх, расположение	Правильное вертикальное положение груза

Таблица символов, которые могут быть применены при маркировке упаковки изделия:

№п/п	Графический символ	Описание значения	Комментарий /Перевод при необходимости
1		Торговый знак предприятия -изготовителя	
2	Кровать медицинская функциональная электрическая Barry	Наименование или обозначение типа (вида) изделия;	Для принадлежностей: Столик прикроватный для Кровати медицинской функциональной электрической Barry
3	Barry MBE-xXxx/ Barry MBE-xXxxx	Наименование или обозначение модификации (варианта исполнения) изделия;	Для обозначения модификации (варианта исполнения) изделия медицинских функциональных кроватей используются следующие буквенно-цифровые значения MBE-xXxx или MBE-xXxxx, где: №п/п (позиция в наименовании модификации слева направо) Буква, цифра Обозначение 1 Barry MBE Barry M-medical (медицинская), B-bed(кровать), E-electric (электрическая) 2 x 2-количество электроприводов - регулировка спинной и бедренно-ножной и ножной секций 3-количество электроприводов -

			регулировка спинной и бедренно- ножной и ножной секции, высоты положения основания матрачного кровати 3 X Тип основания S - стандартное B - широкое L - удлиненное U - универсальное K - кардио 4 x Тип изголовья и изножья p - пластик, w- мдф, xx c - пластик, xx mp – металл/пластик mw – металл/лдсп 5 x p-панельное основание s- ламельное основание
4	SN	Идентификационный (серийный/заводской) номер	
5	Размер (ДхШхВ), мм: _____х_____х_____ Вес брутто, кг: _____	Указание: габаритных размеров упаковки в мм, масса упаковки вместе с изделием в кг, масса изделия без упаковки в кг	

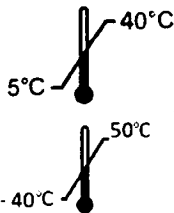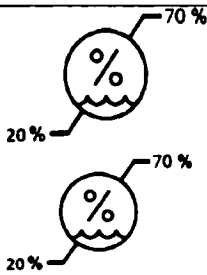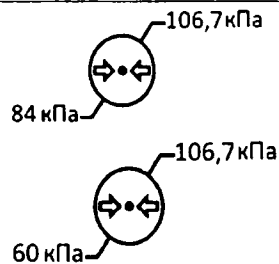	Вес нетто, кг: _____		
6		Особая утилизация.	
7		Дата изготовления изделия (месяц / год в формате xx/xxxx);	
8	Срок хранения : _____	Указание по сроку хранения изделия	
9		Температурный диапазон хранения и транспортировки	
10		Диапазон влажности эксплуатации хранения и транспортировки	
11		Ограничение атмосферного давления хранения и транспортировки	

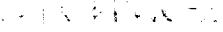12		Информация об изготовителе: Наименование предприятия-изготовителя Адрес предприятия -изготовителя	ООО «АРИДЕС» (ARIDES LLC) 111, ул. Раффи, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения (111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia)
13		Информация о УПП: Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории ЕАС	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2" 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru
14	Регистрационное удостоверение № _____	Номер регистрационного удостоверения	
15	Количество грузовых мест ____ Порядковый номер упаковки	Количество грузовых мест в поставке Порядковый номер упаковки в поставке	
16	 2 000988 666470 Количество в упаковке ____ штук	Штрих-коды используются для идентификации информации о предприятии- изготовителе и информации о товаре, месте производства Количество изделий в одной упаковке в штуках	
17		Беречь от влаги	Медицинское изделие необходимо защищать от влаги
18		Хрупкое, обращаться осторожно	Медицинское изделие может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно

19		Верх, расположение	Правильное вертикальное положение груза
Дополнительные символы, которые может нанести предприятие -изготовитель при необходимости и по требованию заказчика			
23		Каталожный номер	(при необходимости предприятие -изготовитель может ввести) *
24		Номер партии	(при необходимости предприятие -изготовитель может ввести) *
25		Специальный знак обращения продукции ЕАЭС	(при необходимости предприятие -изготовитель может ввести) * Декларирование в рамках регламентов таможенного союза

10. Перечень нормативной документации

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик».

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания».

ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность».

ГОСТ 30324.2.38-2012 (IEC 60601-2-38:1996) «Изделия медицинские электрические. Часть 2-38. Частные требования безопасности к кроватям медицинским электрическим».

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».

ГОСТ Р МЭК 62366-2013 «Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности».

ГОСТ 30893.1-2002 «Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками».

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

ГОСТ Р 52770-2016. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными».

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний».

ГОСТ 4011-72. «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». п. 2.

ГОСТ Р 57162-2016 «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии».

МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава».

МУК 4.1.653-96 «Методические указания по реакционно-хроматографическому определению формальдегида в воде».

МУК 4.1.657-96 «Методические указания по газохроматографическому определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде».

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии».

ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида» п. 6.

И-880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

МР 1941-78 «Методические рекомендации по определению хлористого винила в поливинилхлориде и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания».

МУК 4.1.3169-14 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис (2-этилгексил) фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава».

«Методические указания, по санитарно-гигиенической оценке, резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.1986 № 4077-86.

11. Эксплуатация

Кровать Barry и ее принадлежности спроектированы и сконструированы для применения в течение длительного времени.

Срок службы кровати - 5 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям. Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями для всех вариантов исполнения должна эксплуатироваться в соответствии со следующими условиями по эксплуатации:

Температура: от +5°C до +40°C

Относительная влажность: 20 - 70 % (без конденсации)

Атмосферное давление: 84 кПа – 106,7 кПа

11.1 Сборка кровати

Меры безопасности


К сборке и эксплуатации кровати допускается квалифицированный персонал, изучивший настоящее руководство и устройство кровати, а также правила ее эксплуатации.

Подготовка к работе


После транспортирования кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо ее выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

11.1.1 Порядок сборки Кровати медицинской функциональной электрической Barry с принадлежностями, варианты исполнения Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx (исключая модификации Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx):

1. Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

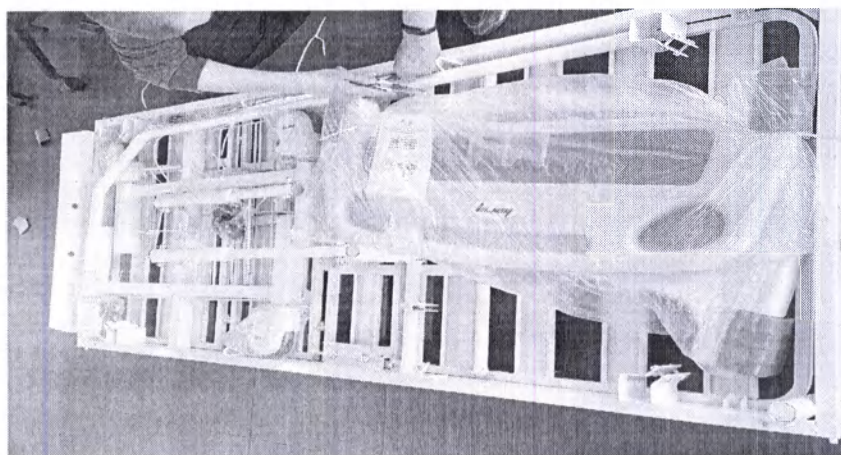


2. Установите матрасное основание с секциями снизу на чистую поверхность.
3. Вставьте колесную раму с колесами в хомуты, расположенные на раме матрасного основания, и, надев шайбу на винт M8×30, пропустите винт сквозь отверстия в хомуте. Наденьте вторую шайбу и затяните гайку. Таким же образом установите оставшиеся винты с шайбами и гайками (по 2 на каждую колесную раму).

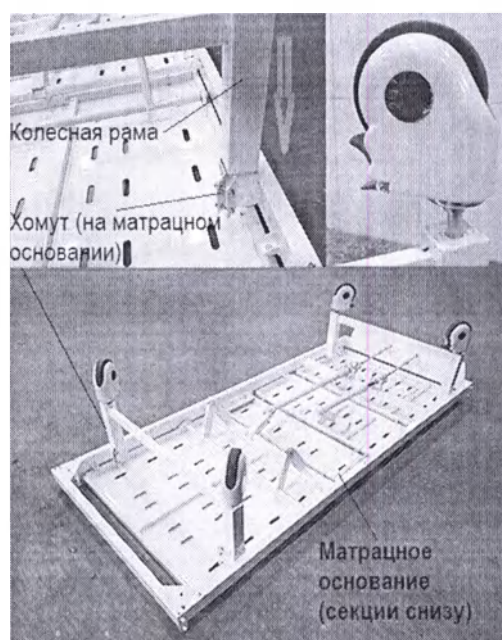


Повернув, установите матрасное основание на колеса.

4. Изножье, (отличается от изголовья наличием пластмассового кармана для хранения данных пациента), устанавливается со стороны матрасного основания, на которой расположены блок управления и электродвигатели регулировки положения секций.
5. Вставьте крючки снизу изножья на специальные штифты, установленные на матрасном основании, и, поворотом рычажных планок, зафиксируйте изножье по штифтам.
6. Изголовье, устанавливается со стороны матрасного основания, противоположной изножью.

7. Вставьте крючки снизу изголовья на специальные штифты, установленные на раме кровати, и, поворотом рычажных планок, зафиксируйте изголовье по штифтам

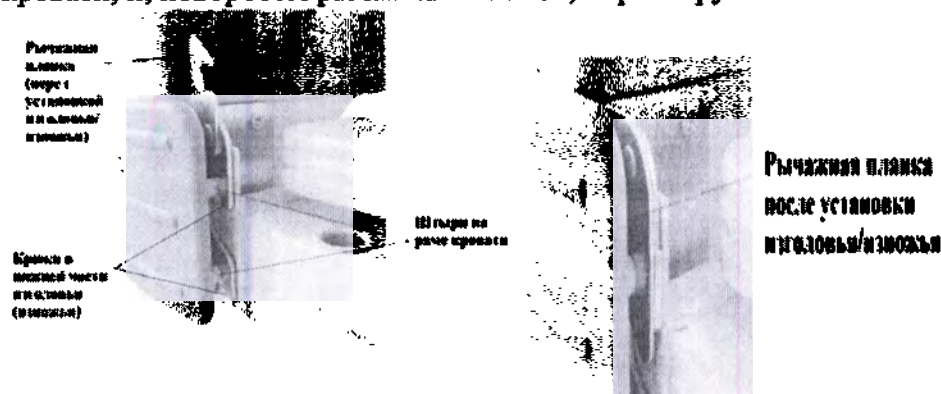


8. Сориентируйте боковые ограждения так, чтобы кнопки освобождения фиксаторов боковых ограждений располагались с одной и той же стороны (у изголовья). Совместите отверстия на боковых ограждениях с отверстиями на раме кровати. Надев шайбы на болты М8×70, пропустите их насквозь со стороны бокового ограждения и затяните гайками.

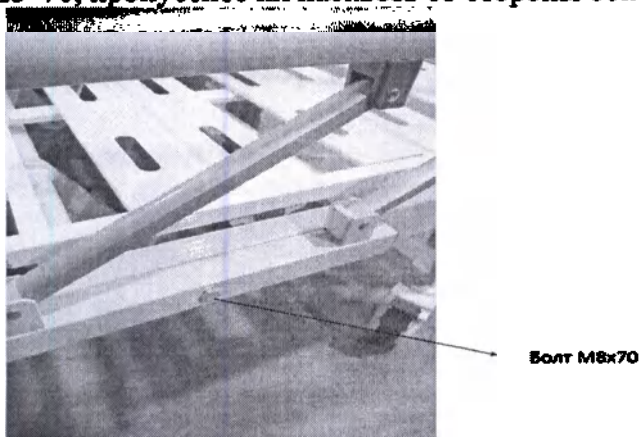


9. Аналогично установите второе боковое ограждение.

10. Установите полку для принадлежностей. Для этого наденьте полку скобами на поперечину колесной рамы. Полку можно установить на раму как со стороны изножья, так и изголовья.

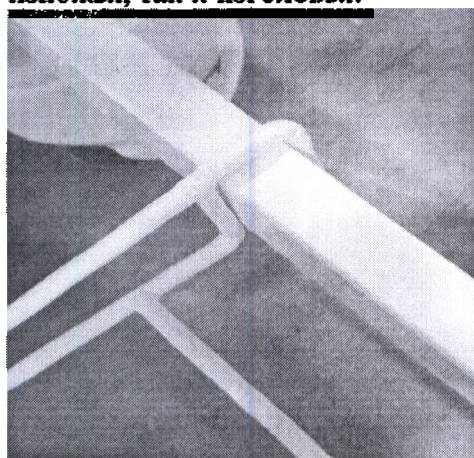


11. При необходимости, установите стойку для внутривенных вливаний в одно из 6 отверстий, расположенных вдоль рамы матрасного основания.

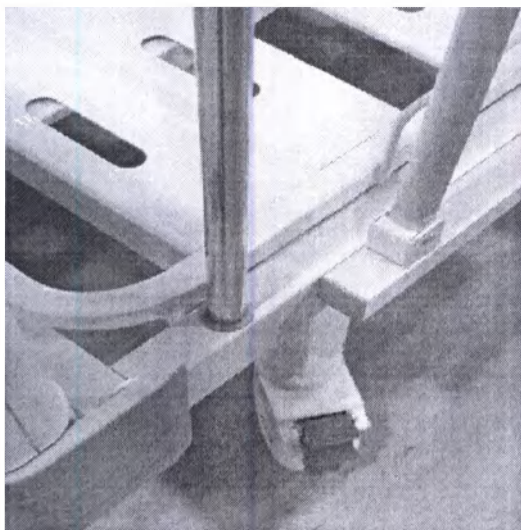

12. Установите устройство для подтягивания пациента в одно из двух отверстий, расположенных на раме матрасного основания со стороны изголовья.

13. Расположите матрас и подушку на матрасном основании кровати.

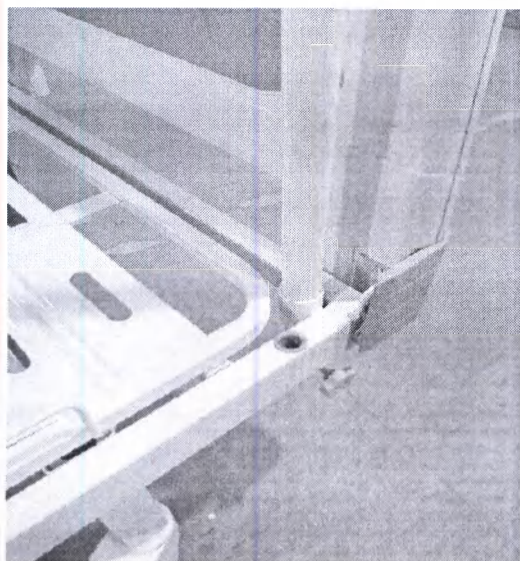

14. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, затяжку всех резьбовых соединений, работоспособность подъемных секций. Установите кровать на место, проверьте действие тормозов на колесах.

15. После сборки и проверки надежности крепления всех узлов, осуществите дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

11.1.2 Порядок сборки Кровати медицинской функциональной механической Barry с принадлежностями, варианты исполнения Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx:

1. Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.


2. Установите матрасное основание с секциями снизу на чистую поверхность.

3. Закрепите опоры на соответствующих уголках на раме кровати болтами M10×20, затянув гайками.

4. Соедините рычаги изменения высоты (положение вилки – к матрасному основанию) с металлическими прямоугольными трубами, присоединенными к электродвигателям, присоединив трубы к вилке рычага с внешних сторон, с обеих сторон кровати.

5. Соедините рычаги изменения высоты с опорами 2 винтами M10×75 и самоконтрящимися гайками M10 с обеих сторон кровати.

6. Соедините колесные рамы с готовыми конструкциями опоры и рычага изменения высоты 6 винтами M10×75 и самоконтрящимися гайками M10 с обеих сторон кровати.

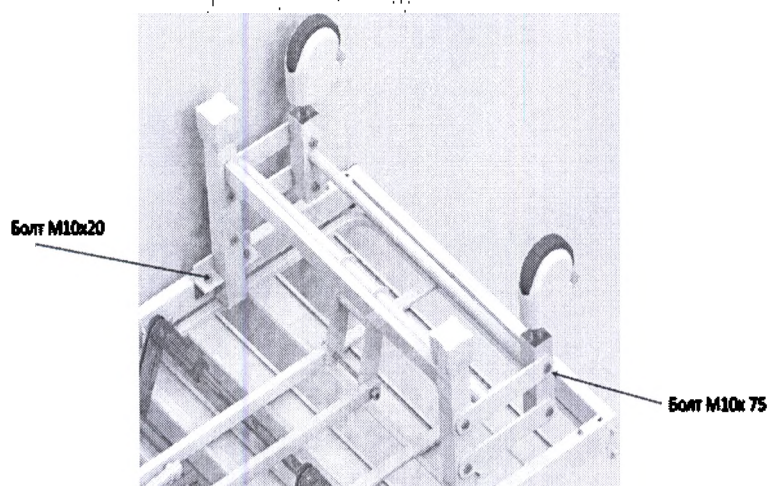

Для дальнейшей сборки переверните кровать и установите в рабочее положение.

7. Изножье, устанавливается со стороны матрасного основания, на которой расположены блок управления и электродвигатели регулировки положения секций.

8. Для установки изножья и изголовья, выполните действия, описанные в пунктах 6 – 9 из порядка сборки I.

9. Для установки боковых ограждений, выполните действия, описанные в пунктах 10–11 из порядка сборки I.

10. При необходимости установите стойку для внутривенных вливаний в одно из отверстий, расположенных вдоль рамы.

11. Установите устройство для подтягивания пациента в одно из двух отверстий, расположенных на раме матрасного основания со стороны изголовья.

12. Расположите матрац и подушку на матрасном основании кровати.

13. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, затяжку всех резьбовых соединений, работоспособность подъемных секций. Установите кровать на место, проверьте действие тормозов на колесах.

14. После сборки и проверки надежности крепления всех узлов, осуществите дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

15. Регулирование положения секций осуществляется в соответствии со спецификой лечения или для установки удобного положения больного. Соответствующие секции (спинная (на всех исполнениях кроватей) и бедренно-ножная и ножная (только на кроватях исполнений Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx и Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx, а также изменение высоты расположения матрасного основания относительно пола (кровать Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx), осуществляются с помощью соответствующих кнопок пульта управления, подключенного к блоку управления, соединяющего по средствам кабелей пульт управления с электродвигателями и питанием от сети.

16. Перед использованием кроватей для новых пациентов, необходимо продезинфицировать наружные части кровати.

17. Для достижения длительного срока эксплуатации, просим соблюдать следующие правила:

- запрещается превышать максимально допустимую весовую нагрузку;
- запрещается стоять на кровати;
- запрещается оставлять кровать на неровной поверхности без включения тормоза на колесах;
- запрещается движение кровати по поверхности с неровностями;


- проверяйте, чтобы колеса и боковые ограждения находились в зафиксированном положении; во избежание поломки избегайте слишком сильного нажатия на педали тормоза;
- не устанавливайте кровать в помещениях с газами или жидкостями, вызывающими коррозию.

11.2 Эксплуатация кровати

Все механизмы электрической регулировки кровати могут управляться с помощью пульта управления кроватью.

- Во время подключения медицинского изделия к электрической сети, необходимо проверить качество защитного заземления с помощью мультиметра (сопротивление защитного заземления доступных металлических частей должно быть не более 0,2 Ом)
- В период использования медицинского изделия не отключать медицинское изделие от электрической сети во избежание потери контакта защитного заземления.
- Установление рабочего режима медицинского изделия происходит в течение 30 секунд с момента подключения кровати к электрической сети
- Не допускайте размещения на кровати большего веса, чем это разрешено.
- Удостоверьтесь в том, что весь диапазон регулировки кровати свободен от препятствий.
- Мебель, подоконники, покатые крыши, и т.п. не должны находиться на траектории регулировки.
- Пульт управления можно повесить на кровати за гибкий крючок.
- Пульт управления является водонепроницаемым, и его можно протирать начисто с помощью специальной ветоши.
- Приводные электродвигатели работают до тех пор, пока нажата соответствующая кнопка.
- За исключением положения для сна, все опции регулировки функциональной медицинской кровати работают в обоих направлениях.
- В отношении кнопок применяется следующее основное правило: **↑** Поднять, **↓** Опустить
- Кнопки пульта управления для регулировки положения кровати:

	Регулировка высоты поднятия спинной секции Данная кнопка используется для изменения уровня подъема опоры для головы и спины.
	Регулировка высоты опускания спинной секции Данная кнопка используется для изменения уровня опускания опоры для головы и спины.
	Регулировка высоты поднятия бедренно-ножной и ножной секции Данная кнопка используется для изменения уровня подъема опоры для ног.
	Регулировка высоты опускания бедренно-ножной и ножной секции Данная кнопка используется для изменения уровня опускания опоры для ног.
	Синхронная регулировка высоты поднятия спинной и бедренно-ножной и ножной секции Данная кнопка используется для изменения уровня подъема опоры для головы, спины и ног одновременно.

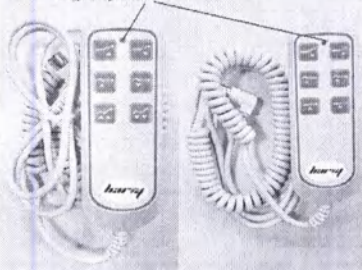	Синхронная регулировка высоты опускания спинной и бедренно-ножной и ножной секции Данная кнопка используется для изменения уровня опускания опоры для головы, спины и ног одновременно.
	Регулировка высоты основания матраца Подъем в горизонтальном положении: При удержании кнопки основание матраца регулируется в максимально высокое положение.
	Регулировка высоты основания матраца Опускание в горизонтальном положении: При удержании кнопки основание матраца регулируется в максимально низкое положение.
	Индикатор питания, расположенный на пульте управления для всех вариантов исполнения кроватей Цвет индикации: синий, если кнопки пульта управления в активном состоянии

11.3 Разборка кровати

11.3.1 Разборка кровати Barry MBE-2Xxx, Barry MBE-2Xxxx (исключая модификации Barry MBE-2Kxx, Barry MBE-2Kxxx)

1. Заблокируйте все четыре колеса кровати
2. Приведите секции кровати в горизонтальное положение.
3. Вытащите разъем электропитания из розетки.
4. Отсоедините кабель от разъема для подключения.
5. В последовательном порядке снимите боковые ограждения.
6. Поворотом рычажных планок, освободите крючки изножья и изголовья от специальных штифтов рамы кровати и снимите изножье и изголовье.
7. Снимите инфузионную стойку и устройство для подтягивания пациента (если они установлены).
8. Удалите штепсельные вилки и кабельный зажим из приводных двигателей в спинной и ножной секциях.
9. Для демонтажа колесных стоек выполните следующие действия:
 - 9.1. Установите кровать на горизонтальную плоскость матрацным основанием вниз.
 - 9.2. Отсоедините 8 винтов М8 затягивающих колесные стойки на раму и извлеките последние из хомутов.
10. Поместите демонтированные части в упаковку для складского хранения.

11.3.2 Разборка кровати Barry MBE-3Xxx, Barry MBE-3Xxxx

1. Заблокируйте все четыре колеса кровати
2. Приведите секции кровати в горизонтальное положение.
3. Приведите ложе кровати в крайнее нижнее положение.
4. Вытащите разъем электропитания из розетки.
5. Отсоедините кабель от разъема для подключения.

6. В последовательном порядке снимите боковые ограждения.
7. Поворотом рычажных планок, освободите крючки изножья и изголовья от специальных штифтов рамы кровати и снимите изножье и изголовье.
8. Снимите инфузионную стойку и дугу для подтягивания (если они установлены).
9. Удалите штепсельные вилки и кабельный зажим из приводных двигателей в спинной и ножной секциях.
10. Для демонтажа колесных стоек и опор выполните следующие действия:
 - 10.1 Установите кровать на горизонтальную плоскость матрасным основанием вниз.
 - 10.2 Отсоедините 8 винтов M10×75 стягивающих опорные стойки на раму и 8 болтов M10x20 соединяющих колесные стойки с опорами.
11. Поместить демонтированные части в средства складского хранения.

12. Сведения о стерильности, чистке и дезинфекции изделия

Изделие и принадлежности поставляются нестерильными, процессу стерилизации не подлежат.

12.1 Рекомендации по очистке

Держите кровать в чистоте и регулярно проводите ее чистку в следующем порядке:

1. Перед чисткой всегда вынимайте сетевой штепсель из сетевой розетки, для исключения опасности получения удара электротоком.
2. Закройте электронные соединения, чтобы влага не могла попасть внутрь блока управления. Вытирайте блок управления и электродвигатели сухой тряпкой.
3. Удалите все поверхностные загрязнения.
4. Снимите чехлы матраса и подушки. Стирайте чехлы в стиральной машине с использованием средства для деликатной стирки, при температуре не более 60°C. Не сушите чехлы в сушилке для белья.

12.2 Дезинфекция

Проводите дезинфекцию перед использованием кровати, после каждого пациента/использования, а также в соответствии с графиком дезинфекции принятом в вашем учреждении, нормативными и методическими указаниями и рекомендациями, действующими в стране, где изделие эксплуатируется.

На территории Российской Федерации дезинфекцию следует проводить в соответствии с МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения». Дезинфекцию рекомендуется проводить способом двукратного протирания наружных поверхностей салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем средстве Велтосепт (производства «Велт», Россия). После окончания дезинфекции удалите остатки дезинфицирующего средства мягкой тканью, смоченной в чистой воде, затем сотрите остатки воды сухой чистой тканью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При уходе за кроватью не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как металлические губки и сильнодействующие спиртосодержащие, абразивные чистящие средства, очистители или растворители, такие как толуол, ксилол или ацетон, а также, средства, содержащие щелочь, кислоту, это может привести к повреждению оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.

13. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание кровати направлено для контроля технического и эксплуатационного состояния, в целях избежания внеплановых поломок, в том числе связанных с возможным причинением вреда здоровью человека.

Техническое обслуживание Кровати медицинской функциональной электрической Barry с принадлежностями включает в себя:

- Периодический (не реже одного раза в месяц) осмотр целостности покрытий кровати, осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций), проверку работоспособности и надежности крепления подъемных механизмов, секций кровати. В случае ослабления резьбовых соединений затянуть их ключом.
- Осмотр колес; проверку работоспособности тормозов, надежности крепления колес к ножкам, свободного вращения колес вокруг своей оси. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, очищать их от загрязнений, при необходимости, производить смазку крепежных элементов. Регламентное техническое обслуживание должно проводиться ежегодно, силами квалифицированного технического персонала лечебного заведения или специалистами авторизованного сервисного центра. Помимо регулярных комплексных проверок со стороны квалифицированного инженерно-технического персонала, обычные пользователи (медицинский персонал) также, обязаны проводить ежедневные визуальные осмотры используемых кроватей и функциональные проверки, до использования медицинской кровати новым пациентом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При повреждении или неисправности, медицинская кровать должна быть незамедлительно выведена из эксплуатации, а также отключена от источника питания до ремонта или замены неисправных частей.

Рекомендация: Один раз в месяц проводите проверку всех электрических и механических составляющих.

Один раз в год проводите проверку показателей электробезопасности кровати в соответствии с порядком, изложенным в МЭК 60601-1 для изделий класса защиты I типа В. В случае отрицательного результата проверки или подозрения на неизбежный отказ в работе, не используйте кровать и свяжитесь с уполномоченным представителем производителя на территории РФ. Результаты проверки электробезопасности должны быть отражены в журнале с отметками о проведении технического обслуживания.

При неиспользовании медицинского изделия на протяжении длительного периода времени следует полностью зарядить встроенный аккумулятор (продолжительность подзарядки примерно 4 часа) и затем 3 раза поднять и опустить медицинское изделие без нагрузки. Повторяйте данную процедуру каждые 6 месяцев. Это способствует сохранению срока службы встроенного аккумулятора.

Один раз в два года проводите замену аккумуляторной батареи в блоке управления (при наличии). Замена аккумулятора должна проводиться уполномоченным квалифицированным специалистом. Перед заменой аккумулятора отключите кабель питания кровати от электросети. Отсоедините блок управления, замените старый аккумулятор на новый. В блоке управления кровати используется внутренняя аккумуляторная батарея, не более (Д×Ш×В) мм: 80×50×70, Вес, не более кг: 0,5, Емкость, mAh: 2000, Тип: Li-ion 18650, Номинальное напряжение: 24 В, Количество циклов до полного разряда: 50, тип разъема подключения: JST XH 2.54 (2Pin) фирмы Shaoxing Jieshun Electric Machinery Co., Ltd. (Китай) (подробнее см. таблицу раздела 8.2.10 Внешний вид (чертеж) и описание комплектующих).

Используйте следующую Ведомость технического контроля:

Проверка		НОРМА	НЕ НОРМА	Описание неисправности
Что проверить	Проверить в отношении			
Визуальный осмотр электрических составляющих				
Пульт управления, кабель пульта управления	Повреждение, отсутствие индикации, контакт кабеля соединительного, кабель соединительный			
Блок управления в сборе с блоком управления	Повреждение, прокладка кабеля, кабель соединительный, контакты кабелей соединительных, кабель питания			
Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции	Повреждение, отсутствие звука, прокладка кабеля, кабель соединительный, контакт кабеля соединительного,			
Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции	Повреждение, отсутствие звука, прокладка кабеля, кабель соединительный, контакт кабеля соединительного,			
Электропривод для регулировки высоты положения основания матрасного кровати	Повреждение, отсутствие звука, прокладка кабеля, кабель соединительный, контакт кабеля соединительного			
Визуальный осмотр механических составляющих				
Основание матрасное	Повреждение, деформации			
Колесо самоориентирующееся с тормозом	Повреждение, деформации			
Изголовье, Изножье	Повреждение, деформации			
Ограждения боковые	Повреждение, обломки			
Устройство для подтягивания	Крепление, повреждение			
Держатель принадлежностей	Крепление, повреждение			
Растомат	Крепление, повреждение			
Стойка для внутривенных вливаний	Крепление, повреждение, крючки			
Столик прикроватный	Крепление, повреждение			

Столик сервисный	Крепление, повреждение			
Проверка рабочих характеристик электрических составляющих				
Пульт управления кровати	Подъем / опускание секций, полностью матрацного основания, кабель соединительный			
Электропривод для регулировки угла наклона спинной секции	Подъем / опускание секций, полностью матрацного основания, кабель соединительный			
Электропривод для регулировки угла наклона бедренно-ножной и ножной секции	Подъем / опускание секций, полностью матрацного основания, кабель соединительный			
Электропривод для регулировки высоты положения основания матрацного кровати	Подъем / опускание секций, полностью матрацного основания, кабель соединительный			
Колеса самоориентирующееся с тормозом	Процедура безопасного торможения			
Подпись проверяющего лица:	Результат проверки:			Дата:

Возможные неисправности и способы их устранения:

Неисправность	Возможная причина	Меры для устранения
Изделие не реагирует на нажатие никаких кнопок на пульте управления.	Отсутствует электропитание в электросети	Проверьте электропитание в электросети
	Кабель питания или кабель соединительный с блоком управления поврежден или плохо установлен в розетку электропитания	Убедитесь в целостности кабеля, убедитесь, что кабель вставлен в розетку электросети
	Выход из строя электронных компонентов	Отключите изделие от электросети и свяжитесь с сервисной службой
Некоторые кнопки пульта управления не работают	Нарушена целостность кабеля соединительного с блоком управления	Отключите изделие от электросети и свяжитесь с сервисной службой
	Кабель соединительный плохо установлен в разъем блока управления	Убедитесь, что кабель подключен к разъему блока управления
	Выход из строя внутренних компонентов изделия	Отключите изделие от электросети и свяжитесь с сервисной службой
	Элементы основания кровати стали влажными, вследствие выпадения конденсата	Используя ткань протрите и просушите элементы кровати и основание

Основание кровати не перемещается по высоте в соответствии с диапазоном	Выход из строя внутренних компонентов изделия	Убедитесь в отсутствии механических повреждений. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, мешающих движению. Отключите кровать от электросети, не используйте его и свяжитесь с сервисной службой
Высота не изменяется при нажатии соответствующих кнопок пульта управления	Отсутствует электропитание в электросети	Проверьте электропитание в электросети.
	Кабель питания поврежден или плохо установлен в разъем блока управления	Убедитесь в целостности кабеля, убедитесь, что кабель питания подключен в розетку и кабель соединительный пульта управления подключен в разъем блока управления

По вопросам негарантийного технического обслуживания, замены или ремонта неисправных деталей необходимо связываться с уполномоченным представителем производителя на территории РФ:

Российская Федерация - Уполномоченный представитель производителя на территории РФ (УПП):

Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»),
125430, г. Москва, улица Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

тел.: +7(495)792-31-90

e-mail: info@sims2.ru

сайт: www.sims2.ru

14. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие медицинского изделия «Кровать медицинская функциональная электрическая Вагу с принадлежностями» требованиям, установленным в технической и эксплуатационной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 3 месяца.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие, или его составные части в случае обнаружения неисправности, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

По вопросам гарантийного обслуживания на территории РФ, необходимо обращаться к официальному представителю компании-производителя ООО «СИМС-2» по адресу: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18, тел: (495) 792-31-90 (многоканальный), e-mail: info@sims2.ru.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская функциональная электрическая Ваггу с принадлежностями:

_____ (наименование варианта исполнения изделия, серийный номер)

дата выпуска _____

соответствуют технической документации и признана годной к эксплуатации.

_____ подпись лица, ответственного за приемку

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кровать медицинская функциональная электрическая Ваггу с принадлежностями:

_____ (наименование варианта исполнения изделия, серийный номер)

Дата покупки _____

_____ (дата, подпись, штамп торгующей организации)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»
ул. Раффи 111, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения
тел.: + 37460 52 99 50
info@arides.am

15. Контактная информация

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации по вопросам качества:

Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»), Адрес: 125430, Россия, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, помещение 1012Б, ком. С 15 по 18, Тел.: +7 (495)-792-31-90, E-mail: info@sims2.ru, Сайт: sims2.ru

Армения:

ARIDES Limited liability company (Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»)

ARIDES LLC (ООО «АРИДЕС»)

111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

(111, ул. Раффи, Малатия – Себастья, 0064, Ереван, Республика Армения)

Тел.: +37460 52 99 50

Факс: +37460 52 99 50

Адрес электронной почты: info@arides.am

16. Утилизация

По окончании срока службы кровать и принадлежности должны быть утилизированы. На территории Российской Федерации утилизация проводится в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Кровать и принадлежности относятся к классу А - эпидемиологически безопасных отходов, по составу к твердым бытовым отходам. Аккумуляторные батареи должны быть утилизированы в соответствии с классом Г – токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Приложение 1. Электромагнитная совместимость

Данное изделие отвечает следующим ЭМС требованиям, касающимся электромагнитного излучения и помехоустойчивости:

Данное изделие отвечает следующим ЭМС требованиям, касающимся электромагнитного излучения и помехоустойчивости:

Кровать медицинская функциональная электрическая Barry с принадлежностями предназначена для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке			
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания	
Радиопомехи по СИСПР 11	Группа I	Изделия используют радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования, расположенного вблизи электронного оборудования	
Радиопомехи по СИСПР 11	Класс Б	Изделие пригодно для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома	
Гармонические составляющие тока по МЭК 61000-3-2	Класс А		
Колебания напряжения и фликер по МЭК 61000-3-3	Соответствует		
Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость для МИ, не относящихся к ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ			
Изделие предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	±6 кВ - контактный разряд ±8 кВ - воздушный разряд	±6 кВ - контактный разряд ±8 кВ - воздушный разряд	Полы должны быть деревянными, бетонные или из кафеля. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%.
Наносекундные импульсные помехи	±2 кВ - для линий электропитания	±2 кВ - для линий электропитания	Качество электрической

по МЭК 61000-4-4	± 1 кВ - для линий ввода-вывода	± 1 кВ - для линий ввода-вывода	энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	± 1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод" ± 2 кВ - при подаче помехи по схеме "провод-земля"	± 1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод" ± 2 кВ - при подаче помехи по схеме "провод-земля"	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки
Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	$<5\%$ U_T^* (провал напряжения $>95\%$ U_T) в течение 0,5 периода; 40% U_T (провал напряжения 60% U_T) в течение пяти периодов; 70% U_T (провал напряжения 30% U_T) в течение 25 периодов; $<5\%$ U_T (провал напряжения $>95\%$ U_T) в течение 5 с	$<5\%$ U_T (провал напряжения $>95\%$ U_T) в течение 0,5 периода; 40% U_T (провал напряжения 60% U_T) в течение пяти периодов; 70% U_T (провал напряжения 30% U_T) в течение 25 периодов; $<5\%$ U_T (провал напряжения $>95\%$ U_T) в течение 5 с	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю необходимо обеспечить непрерывную работу в условиях возможных прерываний сетевого напряжения, рекомендуется питание МИ осуществлять от источника бесперебойного питания или батареи
Примечание - U_T - уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия			
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями

			коммерческой или больничной обстановки
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6	3 В (среднеквадратичное значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц (среднеквадратичное значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц вне диапазонов частот, выделенных для промышленных, научных и медицинских высокочастотных (ПНМ ВЧ) устройств ^{a)}	3 В ($[V_I]$, В) (среднеквадратичное значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом МИ, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разноса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос: рассчитывается по формуле: для полосы частот от 150 кГц до 80 МГц: $d = [3,5/V_I] \sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ для полосы частот от 80 МГц до 800 МГц: $d = [3,5/E_I] \sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ для полосы частот от 800 МГц до 2,5 ГГц: $d = \left[\frac{7}{E_I} \right] \sqrt{P}$ $d = 2,3\sqrt{P}$ где d - рекомендуемый пространственный разнос, м ^{b)} Р - номинальная максимальная
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000- 4-3	3 В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В/м [E_I], В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц	

			выходная мощность передатчика, Вт, установленная изготовителем. Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой ^{a)}, должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот ^{b)}. Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком 
a) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ] превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ] с целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ]. b) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем V_1, В/м. Примечания: 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2 Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.			
Рекомендуемые значения пространственного разнosa между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и МИ			
Медицинское предназначаются для применения в электромагнитной обстановке, при			

которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь МИ может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и МИ, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика P , Вт	Пространственный разнос d , м, в зависимости от частоты передатчика		
	$d=1,2\sqrt{P}$ в полосе от 150 кГц до 80 МГц	$d=1,2\sqrt{P}$ в полосе от 80 МГц до 800 МГц	$d=2,3\sqrt{P}$ в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00

При определении рекомендуемых значений пространственного разноса для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.

Примечания

- 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
- 2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.
- 3 При определении рекомендуемых значений пространственного разноса для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатю

222 (двестридцать два) (два)

Директор ООО "Аридес"

В. Р. Туманян

