



454021, г. Челябинск улица Энтузиастов 26Б, пом.12, оф.101

ИНН: 7447288920 КПП: 744701001

р/с: 40702810438040004570

Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 046577964

к/с: 30101810100000000964

Контакт-центр: +7(351)701-01-00

www.nct.dental

E-mail: corp@nct.dental

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «НС Технологии»
(ООО «НС Технологии»)

Горягин В.С.

2022 г.

М.П.

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный
в комплекте с заглушкой или без нее
по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020

Инструкция по применению

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

г. Челябинск

Подп. и дата	Изм.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.
--------------	------	--------------	--------------	--------------

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Наименование медицинского изделия.....	4
2.	Описание	41
3.	Описание (механизм) принципа действия медицинского изделия	41
4.	Назначение	42
5.	Область применения	43
6.	Общие характеристики	43
7.	Основные параметры и характеристики.....	44
8.	Комплектность	45
9.	Показание к применению	46
10.	Противопоказания.....	46
11.	Относительные противопоказания	46
12.	Возможные побочные действия.....	48
13.	Маркировка.....	48
14.	Описание символов, нанесенных на маркировку МИ	52
15.	Упаковка	54
16.	Требования безопасности.....	56
17.	Требования охраны окружающей среды.....	56
18.	Транспортирование и хранение	56
19.	Указание по эксплуатации	56
20.	Гарантии изготовителя	57
21.	Как открыть упакованный стерильный продукт	57
22.	Стерильность	57
23.	Срок годности указан на упаковке	57
24.	Конструкция медицинского изделия.....	57
25.	Условия и правила эксплуатации	58
26.	Техническое обслуживание.....	58
27.	Текущий ремонт	58
28.	Уполномоченный представитель производителя в РФ, компания, принимающая претензии и предложения	58

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. I	бл.	Повн. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист
											3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Копировал

Формат А4

1. Наименование медицинского изделия

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, варианты исполнения:

I. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее Синтес Про, размеры (диаметр x длина), заглушка (диаметр x длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская– 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская– 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Бл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист
											4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Копировал

Формат А4

8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 3,6х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0х7 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х7 мм (заглушка 3,4х4,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инс. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
5

Копировал

Формат А4

- имплантат 4,0x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0x18 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0x18 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

19. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0x20 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0x20 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

20. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,0x22 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0x22 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

21. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,5x7 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5x7 мм (заглушка 3,6x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

22. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,5x8 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5x8 мм (заглушка 3,6x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

23. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,5x10 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5x10 мм (заглушка 3,6x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 4,5x12 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5x12 мм (заглушка 3,6x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Зл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
							6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Копировал

Формат А4

42. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
43. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 7,0х4 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
- имплантат 7,0х4 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
44. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 7,0х5 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
- имплантат 7,0х5 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
45. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 7,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
- имплантат 7,0х6 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
46. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
47. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
48. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** 7,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 7,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
49. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** (короткий) 5х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:
- имплантат (короткий) 5х4 мм (заглушка 3х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
50. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **Синтес Про** (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

Инв. № поол.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И.в. Л	Зл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
							9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Копировал

Формат А4

59. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки

Синтес Про (узкий) 3,0x22 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x22 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

60. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки

Синтес Про (узкий) 3,0x24 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x24 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

II. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ, размеры (диаметр x длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 3,5x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 3,5x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
												11

Копировал

Формат А4

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
25. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
26. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
27. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
28. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
29. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
30. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
31. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
32. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (стандарт) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	
					14	

Копировал

Формат А4

- имплантат (стандарт) 5,0x7 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

33. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x8 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x8 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

34. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x10 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x10 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

35. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x12 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x12 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

36. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x14 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x14 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

37. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x6 мм(заглушка 4x3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x6 мм(заглушка 4x3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

38. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x7 мм (заглушка 4x3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x7 мм (заглушка 4x3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

39. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

40. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

15

Копировал

Формат А4

- инструкция по применению - 1 шт.

41. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

42. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х6 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х6 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

43. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х7мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х7 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

44. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х8 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х8 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

45. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х10 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

46. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х12 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

47. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х14 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

48. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х16 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х16 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

49. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х18 мм в составе:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
16

Копировал

Формат А4

- имплантат (узкий) 3,0x18 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

50. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ** (узкий) 3,0x20 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x20 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

51. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ** (узкий) 3,0x22 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x22 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

52. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ** (узкий) 3,0x24 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x24 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

53. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (короткий) 5x4 мм (заглушка 3,0x3,0 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5x4 мм (заглушка 3,0x3,0 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

54. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (короткий) 5,5x4 мм (заглушка 3,0x3,0 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5,5x4 мм (заглушка 3,0x3,0 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

55. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (короткий) 6,0x4 мм (заглушка 3,0x3,0 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 6,0x4 мм (заглушка 3,0x3,0 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

56. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ** (одноэтапный) 2,5x10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5x10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

57. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ** (одноэтапный) 2,5x12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5x12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № чу.сл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

58. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 2,5х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

59. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 3,0х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

60. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 3,0х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

61. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 3,0х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

62. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

63. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

64. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

65. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

66. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

18

Копировал

Формат А4

- имплантат (про) 4,0x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

75. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
76. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
77. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
78. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
79. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
80. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x18 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x18 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
81. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x20 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x20 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
82. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0x22 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,0x22 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
83. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5x6 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. №
Подп. и дата	Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

20

Копировал

Формат: А4

- имплантат (про) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

84. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

85. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

86. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

87. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

88. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

89. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

90. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

91. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № учбл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		21

Копировал

Формат А4

92. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

93. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

94. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

95. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

96. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

97. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

98. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

99. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

100. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											22

Копировал

Формат А4

- имплантат (про) 6,0x7 мм (заглушка 4x3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

101. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (про) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

102. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (про) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

103. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ** (про) 6,0x12 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0x12 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

III. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее **НСТ Нанотитан**, размеры (диаметр x длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист				
						23				
						Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № убл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
19. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
20. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
21. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
22. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № укл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

23. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

25. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

26. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

27. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

28. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

29. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

30. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	Убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

26

Копировал

Формат А4

31. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 4.5х22 мм (заглушка 3.8х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4.5х22 мм (заглушка 3.8х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
32. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 5.0х6 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5.0х6 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
33. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 5.0х7 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5.0х7 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
34. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 5.0х8 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5.0х8 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
35. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 5.0х10 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5.0х10 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
36. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 5.0х12 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5.0х12 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
37. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 5.0х14 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5.0х14 мм (заглушка 3.8х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
38. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 6.0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 6.0х6 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
39. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (стандарт) 6.0х7 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 6.0х7 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

27

Копировал

Формат А4

- имплантат (узкий) 3,0x7мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

48. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x8 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x8 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

49. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x10 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

50. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x12 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

51. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x14 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

52. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x16 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x16 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

53. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x18 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x18 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

54. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x20 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x20 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

55. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x22 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x22 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

56. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки
НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x24 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x24 мм - 1 шт.;

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

29

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

57. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ Нанотитан** (одноэтапный) 2,5х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

58. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ Нанотитан** (одноэтапный) 2,5х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

59. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ Нанотитан** (одноэтапный) 2,5х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

60. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ Нанотитан** (одноэтапный) 3,0х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

61. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ Нанотитан** (одноэтапный) 3,0х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

62. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки **НСТ Нанотитан** (одноэтапный) 3,0х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

63. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

64. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						30
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

74. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

75. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

76. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

77. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

78. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

79. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

80. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

81. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № - субл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											32

Копировал

Формат А4

82. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.0х22 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.0х22 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
83. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х6 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х6 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
84. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х7 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х7 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
85. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х7 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х7 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
86. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х8 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х8 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
87. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х10 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х10 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
88. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х12 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х12 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
89. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х14 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х14 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
90. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой **НСТ Нанотитан** (про) 4.5х16 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4.5х16 мм (заглушка 3.6х5.5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		33

Копировал

Формат А4

99. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

100. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

101. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

102. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

103. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х10 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х10 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

104. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

IV. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест, размеры (диаметр х длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,3х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,3х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

35

Копировал

Формат А4

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

36

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х4мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х4мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х6 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х6 мм (заглушка 3х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х10мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х10мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

V. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911, размеры (диаметр х длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № убл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист
										37
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х8 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Изд.	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд.	Зубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
38

Копировал

Формат А4

10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х24 (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х24 (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,1х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дуч.1.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		39

Копировал

Формат А4

- имплантат (стандарт) 4,5x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Формат А4

далее по тексту: Имплантат, МИ, изделие, дентальный имплантат.

2. Описание

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой изготовлен из титановой проволоки класса Grade 4. Представляет собой металлическое изделие с нанесенной резьбой, подготовленной шероховатой поверхностью. Дентальный имплантат предназначен для остеоинтеграции в челюстную кость и дальнейшее используется в качестве опоры для восстановления зуба (-ов) различными типами (съёмных и несъёмных) дентальных протезных конструкций на верхней и нижней челюсти. Используется во всех типах кости (D2-D4). Практически решает все клинические случаи.

При изготовлении имплантатов используется 3 метода обработки: кислотное травление, лазерное покрытие, пескоструйная обработка.

3. Описание (механизм) принципа действия медицинского изделия

Данный имплантат доступен в диаметрах (В) 2,5; 3,0; 3,5; 3,6; 4,0; 4,1; 4,3; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 мм. и длинах (А) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Вариант исполнения резьбы единственный. Дентальный имплантат «НС Технология» предназначен для остеоинтеграции в челюстную кость и дальнейшее используется в качестве опоры для восстановления зуба(-ов) различными типами (съёмных и несъёмных) дентальных протезных конструкций на верхней и нижней челюсти. Используется во всех типах кости (D2-D4). Почти решает практически все клинические случаи.


Схематичное изображение и таблица характеристик в Приложении В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Убл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист
						Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	41


Копировал

Формат А4

Z - Z (8 1)

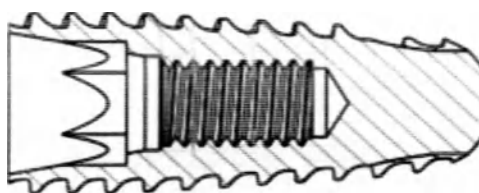

A

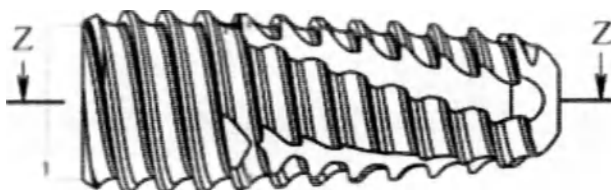

B

Для установки имплантата следует использовать сверло с возвратно-поступательным движением для кости в течение 2-3 секунд, потом передвинуть сверло вверх и наружу, не останавливая контр-углового мотора, чтобы охлаждающий раствор вымывал костную стружку. Продолжайте эту процедуру до достижения необходимой глубины. Сверление должно осуществляться с постоянной обильной подачей охлаждающего раствора. Пренебрежение этим правилом может привести к перегреву кости и неудачному вживлению имплантата. Окончательная имплантация проводится путем ввинчивания имплантата в нужное место по часовой стрелке на полную глубину при помощи подходящих инструментов. После этого необходимо установить закрывающий винт (заглушка). Рекомендуемая максимальная скорость – 1200 об/мин. Введение имплантатов контраугловым наконечником производится при максимальной скорости в 30 об/мин. Максимальная величина крутящего момента затяжки для всех имплантатов - 40 Нсм. Избыточное затягивание может вызвать деформацию внутреннего соединения имплантата и излишнее сдавливание кости, что ставит под угрозу остеоинтеграцию.

4. Назначение

Стерильное изделие, изготовленное из титана (Ti) предназначенное для хирургической имплантации в альвеолярную и/или базальную кость нижней или верхней челюсти для уста-

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. №
Подп. и дата	Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

42

Копировал

Формат А4

- вредные привычки и несоблюдение наставлений хирурга;
- небрежный уход за ротовой полостью;

7. Основные параметры и характеристики

Имплантат соответствует требованиям техническим условиям: ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, комплекту конструкторской документации КДНДИ.121416.101.00.01-КДНДИ.121416.101.00.11.

Размеры имплантата и заглушки должны соответствовать требованиям конструкторской документации КДНДИ.121416.101.00.01- КДНДИ.121416.101.00.11.

Параметры внутреннего диаметра и длины имплантата соответствуют параметрам внешнего диаметра и длине заглушки учитывая допустимые отклонения линейных характеристик $\pm 5\%$ и допустимое отклонение массы изделия $\pm 2\%$. Таблица В1.

Параметры высоты головки заглушки распространяются на все варианты исполнения медицинского изделия и составляет 1,5 мм. учитывая допустимые отклонения линейных характеристик $\pm 5\%$.

Шаг внутренней резьбы имплантата 0,4 мм соответствует шагу внешней резьбы заглушки и распространяется на все варианты исполнений медицинского изделия.

Поверхности имплантата и заглушки должны соответствовать следующим требованиям:

- величина шероховатости металлических поверхностей имплантатов должна быть не более $R_z 75$ мкм по ГОСТ 2789 для базовой длины 8 мм
- на поверхностях имплантатов не должно быть загрязнений и дефектов в виде раковин, забоин, заусенцев, коррозии.

Имплантат устойчив к воздействиям биологических жидкостей в условиях эксплуатации.

Имплантат безопасен в соответствии с требованиями стандартов биологической безопасности серии ГОСТ ISO 10993, в том числе в части токсичности. Имплантат является стерильным.

Стерилизация производится газовым способом этиленоксидом в соответствии с режимом стерилизации, выбранным и утвержденным в рамках валидационных испытаний. Процесс стерилизации (окисью этилена) должен быть валидирован в соответствии с ГОСТ ISO 11135 и контролироваться для каждой партии имплантатов.

Имплантат коррозионностойкий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Убл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
												44

Копировал

Формат А4

В процессе эксплуатации имплантат выдерживает воздействие температуры и влажности, соответствующее климатическому исполнению У категории размещения 6 по ГОСТ 15150.

Максимальный срок хранения (годности) имплантатов до имплантации в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 должен быть 5 лет.

Полный установленный срок службы имплантатов после имплантации должен быть 10 лет.

Имплантат должны выдерживать испытания на усталостную прочность по ГОСТ Р ИСО 14801.

Потребительская упаковка имплантатов герметична.

Имплантат должен быть изготовлен из чистого титана марки 4 (Grade 4) производства ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Россия).

При изготовлении имплантата дентального внутрикостного винтового, однокомпонентного в комплекте с заглушкой или без нее Синтес Про используется метод обработки: Кислотное травление.

При изготовлении имплантата дентального внутрикостного винтового, однокомпонентного в комплекте с заглушкой или без нее НСТ Нанотитан используется метод обработки: Лазерное покрытие.

При изготовлении имплантата дентального внутрикостного винтового, однокомпонентного в комплекте с заглушкой или без нее НСТ используется метод обработки: Кислотное травление.

При изготовлении имплантата дентального внутрикостного винтового, однокомпонентного в комплекте с заглушкой Эверест используется метод обработки: Пескоструйная обработка.

При изготовлении имплантата дентального внутрикостного винтового, однокомпонентного в комплекте с заглушкой НСТ 911 используется метод обработки: Пескоструйная обработка.

Данные методы описаны в конструкторской документации КДНДИ.121416.101.00.01, КДНДИ.121416.101.00.04, КДНДИ.121416.101.00.07, КДНДИ.121416.101.00.11 и технологической документации.

Заглушка для имплантата должна быть изготовлена из чистого титана марки 4 (Grade 4) производства ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Россия).

8. Комплектность

Комплект поставки имплантата должен включать:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № аубл.	Посл. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист	
										45	
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- имплантат (в комплекте с заглушкой или без нее) в количестве 1 шт. в индивидуальной упаковке;
- транспортная тара (КДНДИ.121416.101-00.Т) из гофрокартона, производитель Россия, ООО «Картонно-бумажный комбинат» г. Туймазы;
- инструкция по применению (КДНДИ.121416.101-00.ИЭ).

9. Показание к применению

В качестве искусственного корня зуба, необходимо для восстановления отсутствующего зуба, дентальный имплантат «НС Технология» предназначен для использования в зубной имплантологии; он используется для замены естественного корня зуба путем имплантации в верхнюю или нижнюю альвеолярную кость хирургическим путем. Дентальный имплантат предназначен для использования на нижних и верхних челюстях полностью или частично лишенных зубов для опирания отдельных или многоэлементных реставраций, включая протезы с фиксацией на цементе, на винте, съёмные протезы, а также концевые и промежуточные опоры для несъёмных мостов.

10. Противопоказания

Подразумевает наличие заболеваний и определенных состояний организма, когда оперативное вмешательство представляет собой очевидный риск для здоровья, а также когда имеются не поддающиеся лечению заболевания, которые делают невозможным достижение положительных результатов имплантации.

К ним можно отнести:

- Хронические заболевания в стадии декомпенсации.
- Системные нарушения коагуляции и гемостаза.
- Иммунодефициты, ВИЧ и любая другая серопозитивная инфекция.
- Психические заболевания.

11. Относительные противопоказания

Не противопоказания, а лишь заболевания, которые создают определённые трудности для достижения прогнозируемого результата, статистически снижают эффективность имплантации и могут стать причиной неудачного лечения. К факторам риска следует отнести неблагоприятные анатомические условия, которые требуют дополнительных оперативных вмешательств или нестандартных подходов в лечении, а также стиль жизни, возраст паци-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Убл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист				
							46				
							Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А4

ента, его интеллектуальный уровень и эмоциональный статус, острые и хронические заболевания, а также патологии, при которых можно стабилизировать гомеостаз или компенсировать изменения в органах и системах организма, благодаря современным методам лечения.

К ним можно отнести:

- Острые воспалительные заболевания и острые вирусные инфекции.
- Хронические инфекционные заболевания (туберкулёз, актиномикоз и т.д.).
- Обострение хронических заболеваний.
- Высокая степень риска бактериемии (больные с протезами клапанов сердца и перенесшие бактериальный эндокардит, ревматизм).
- Недавно перенесенные инфаркт или инсульт.
- Беременность и лактация.
- Лечение препаратами, ухудшающими регенерацию тканей (гормональная, лучевая и химиотерапия, приём иммунодепрессантов и т.д.).
- Подростки в возрасте до 18 лет.
- Остеопатии - заболевания, которые отрицательно влияют на остеогенез.
- Остеопороз – снижение общего объёма костной ткани.
- Остеомалация – неадекватная минерализация органического костного матрикса при сохраняющейся в норме скелетной массе и объёме кости.
- Заболевания, нарушающие остеогенез: заболевания щитовидной железы, заболевания паращитовидных желёз - сахарный диабет, заболевания гипофиза, патология надпочечников, болезни крови.
- Алкоголизм и наркомания вызывают не только изменения психики, но и целый ряд соматических расстройств, влияющих на остеогенез.
- Системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка, дерматомиозит, синдром Сьегрена, группа врождённых системных заболеваний соединительной ткани, наследуемых по аутосомно-доминантному типу: синдромы Книста, Гурлера, Менкеса, болезни Гоше, Ниманна-Пика, различные типы врождённых дисплазий и дизостозов, аллергические заболевания - металлозы.
- Применение пациентами лекарственных препаратов, уменьшающих свертываемость крови.
- Патологические состояния челюстно-лицевой области и полости рта: лейкоплакия, стоматит, ксеростомия, кариес, пародонтит, гингивит, пародонтоза макроглоссия, неправильный прикус, заболевания височно-нижнечелюстных суставов, бруксизм и неудовлетворительная

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. ... -убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

47

Копировал

Формат А4

гигиена полости рта. Лечение этих заболеваний, должно осуществляться параллельно с имплантацией, либо имплантация может расцениваться как один из способов лечения.

12. Возможные побочные действия

- Неудачная имплантация
- Инфекция
- Перфорирование верхнечелюстной пазухи
- Повреждение альвеолярной кости или нерва в челюсти
- Разрушение кости
- Нервный паралич
- Эритема или отек
- Серьезная резорбция кости
- Периимплантит

13. Маркировка

Изделие, в количестве 1 шт. упаковано в пластиковую тубу, далее в блистер, блистер укладывается в бумажную упаковку, а затем в картонную транспортную тару.

Маркировка на упаковке

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее Синтес Про

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						48
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4



Имплантат дентальный внутрикостный винтовой
однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее
по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, вариант исполнения

ИМПЛАНТАТ ДЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИКОСТНЫЙ ВИНТОВОЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ СИНТЕС ПРО

Синтез Про, размеры (диаметр x длина):


3,5 x 8 мм

Заглушка, размеры (диаметр x длина):

5,5 x 3,4 мм

REF SP3508

LOT Ti 1020-01/01

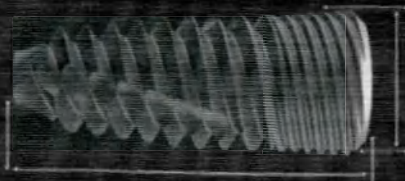

Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 26 Б, помещение 12, оф. 101
Телефон: +7 (351) 701-01-00
Адрес электронной почты: corp@ncl.dental
ИНН 7447288920

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения: от +5 до +40 С при относительной влажности от 30% до 75%
(без образования конденсата)
Срок хранения: 5 лет со дня изготовления



2020-10 2025-10

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ стандарт



Имплантат дентальный внутрикостный винтовой
однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее
по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, вариант исполнения

ИМПЛАНТАТ ДЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИКОСТНЫЙ ВИНТОВОЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ НСТ СТАНДАРТ

НСТ Стандарт, размеры (диаметр x длина):


3,5 x 6 мм

Заглушка, размеры (диаметр x длина):

3,5 x 3,4 мм

REF NCTi-3506

LOT Ti 1020-01/01

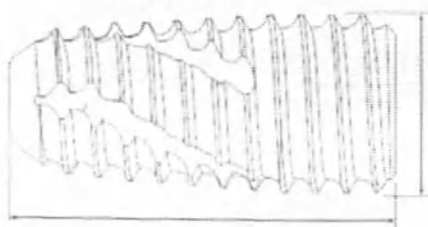

Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 26 Б, помещение 12, оф. 101
Телефон: +7 (351) 701-01-00
Адрес электронной почты: corp@ncl.dental
ИНН 7447288920

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения: от +5 до +40 С при относительной влажности от 30% до 75%
(без образования конденсата)
Срок хранения: 5 лет со дня изготовления



2020-10 2025-10

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ Нанотитан

Ино. № подл.	Подп. и дата
Взам. инж. №	Инв. № субли.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

49

Копировал

Формат А4



Имплантат дентальный внутрикостный винтовой
однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее
по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, вариант исполнения

ИМПЛАНТАТ ДЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИКОСТНЫЙ ВИНТОВОЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ НСТ НАНОТИТАН

НСТ Нанотитан, размеры (диаметр x длина):


3,5 x 6 мм

Заглушка, размеры (диаметр x длина):

3,5 x 3,4 мм

REF nTi-3506

LOT Ti 1020-01/01

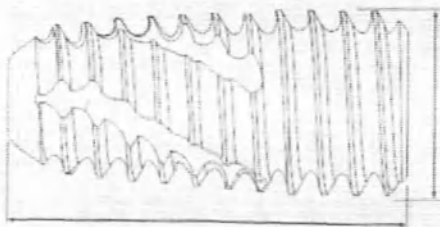

Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 26 Б, помещение 12, оф. 101
Телефон: +7 (351) 701-01-00
Адрес электронной почты: corp@nct dental
ИНН 7447288920

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения: от +5 до +40 С при относительной влажности от 30% до 75%
(без образования конденсата)
Срок хранения: 5 лет со дня изготовления

STERILE 2020-10 2025-10

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест



Имплантат дентальный внутрикостный винтовой
однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее
по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, вариант исполнения

ИМПЛАНТАТ ДЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИКОСТНЫЙ ВИНТОВОЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ ЭВЕРЕСТ

Эверест, размеры (диаметр x длина):


4,3 x 4 мм

Заглушка, размеры (диаметр x длина):

2,5 x 3 мм

REF EV-4304

LOT Ti 1020-01/01

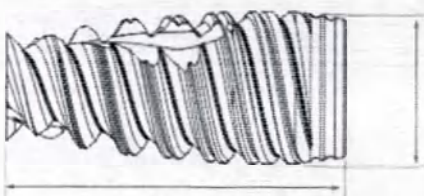

Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 26 Б, помещение 12, оф. 101
Телефон: +7 (351) 701-01-00
Адрес электронной почты: corp@nct dental
ИНН 7447288920

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения: от +5 до +40 С при относительной влажности от 30% до 75%
(без образования конденсата)
Срок хранения: 5 лет со дня изготовления

STERILE 2020-10 2025-10

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ


Лист

50

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

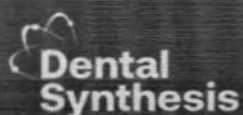

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой
однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее
по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, вариант исполнения

ИМПЛАНТАТ ДЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИКОСТНЫЙ ВИНТОВОЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ ИСТ 911

ИСТ 911, размеры (диаметр x длина):


4,1 x 10 мм

Заглушка, размеры (диаметр x длина):

5,5 x 3,4 мм

REF KS-4110

LOT Ti 1020-01/01

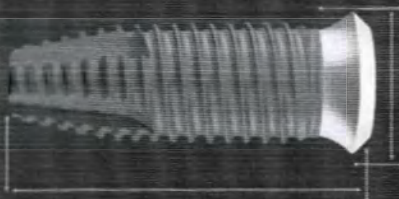

Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 26 Б, помещение 12, оф. 101
Телефон: +7 (351) 701-01-00
Адрес электронной почты: corp@nct.dental
ИНН 7447288220

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения: от +5 до +40 °С при относительной влажности от 34% до 75%
(без образования конденсата)

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления



2020-10



2025-10

Транспортная маркировка

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»

ТУ 32.50.22-001-39072168-2020

Дата упаковки: _____

Наименование МИ: Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный
в комплекте с заглушкой или без нее

Варианты исполнения: _____



Упаковочный лист

Упаковочный лист

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «НС Технологии»

Наименование: Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный
в комплекте с заглушкой или без нее по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020

Номер упаковщика: _____

Дата упаковки: _____

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

51

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

14. Описание символов, нанесенных на маркировку МИ

Символы, применяемые на транспортной упаковке

Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование или заводская марка изготовителя;
- наименование и обозначение настоящих технических условий;
- вариант исполнения имплантата в упаковке;
- год и месяц упаковывания.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Верх", "Беречь от влаги".

Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

Символы и знаки на транспортной маркировке

Символ	Описание символа
	Верх изделия. Показывает стороны открывания
	Беречь от влаги
	Логотип компании производителя

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

52

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Символы и знаки на изделии

Символ

Описание символа



Стерилизация оксидом этилена



Не стерилизовать повторно



Запрет на повторное применение



Обратитесь к инструкции по применению



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки



Дата изготовления



Изготовитель



Номер по каталогу



Код партии

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № сущ. и	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

53

Копировал

Формат А4



Использовать до

Регистрационное
удостоверение

№ _____ от _____


Номер и дата будут внесены после получения
Регистрационного удостоверения

Условия хранения

от + 5 °С до + 40 °С без образования конденсата

Срок хранения

5 лет со дня изготовления

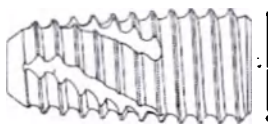

Схематичное изображение имплантата

Длина; Диаметр

В соответствии варианту исполнения



Штрих-код продукции

В каждую коробку с имплантатами должен быть вложен упаковочный лист, на котором указывается:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование имплантатов;
- условный номер упаковщика или контролера;
- дата упаковывания.

15. Упаковка

Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТУ.

Имплантат должен быть очищен от загрязнений, обезжирен, высушен. Упаковывание имплантата следует осуществлять так, чтобы исключить возможность повреждения их при транспортировании и хранении.

Потребительская тара имплантата должна быть упакована в транспортную тару: картонную коробку по ГОСТ 9142.

Характеристики упаковки (ДхШхГ):

Потребительская упаковка: Имплантат стерильно упакован в пластиковую колбу.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Зам. инв. №	Инв. № уubl.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

54

Копировал

Формат А4

Пластиковая колба (5,5х1,4х1,4 см.), винт-заглушка стерильно упакованы в вакуум-сформированный горячим способом пластиковый блистер с отрывным верхним бумажным листом.

Блистеры (9х4,5х1,8 см.) упаковываются в первичную транспортную упаковку: коробки из картона по 1 шт. в каждую.

Коробка из картона (9,2х4,6х2 см.) упаковывается по 10 шт. в транспортную упаковку.

Транспортная упаковка (24х12,5х12,5 см.).

Картонная коробка оклеивается лентой клеевой на бумажной основе по ГОСТ 18251, или бумагой-основой для клеевой ленты по ГОСТ 10459.

В каждую коробку с имплантатами вложен упаковочный лист, на котором указывается:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование имплантатов;
- условный номер упаковщика или контролера;
- дата упаковывания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ				
					Лист 55				

Копировал

Формат А4

16. Требования безопасности

Запрещается применение изделий, в случае если упаковка была открыта или повреждена.

Запрещается применение изделия по истечению срока годности.

Запрещается повторное применение изделия.

Запрещается повторная стерилизация изделия.

17. Требования охраны окружающей среды

Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса Б.

Упаковка имплантата утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса А.

Изготовление изделий должно производиться с соблюдением общих требований безопасности согласно ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.005.

18. Транспортирование и хранение

Транспортировать имплантаты следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Имплантаты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика в сухих, проветриваемых помещениях в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

Пределы температуры воздуха при хранении: от + 5 °С до + 40 °С.

Пределы температуры воздуха при транспортировании: от - 50 °С до + 50 °С.

Относительная влажность воздуха при транспортировании и хранении: от 30% до 75% (без образования конденсата).

Атмосферное давление, в диапазоне: от 795 гПа до 1060 гПа.

19. Указание по эксплуатации

Эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

В период хранения и подготовки к имплантации должны соблюдаться правила обращения, установленные в эксплуатационной документации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	убл. Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
56

Копировал

Формат: А4

После транспортирования в условиях отрицательных температур имплантаты должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 12 ч.

20. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие имплантатов требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения имплантатов - 5 лет со дня изготовления.

21. Как открыть упакованный стерильный продукт

Открыть бумажную упаковку в условиях чистоты и стерильности.

Аккуратно вытащите блистер соответствующим стерильным способом.

Вскройте блистер и вытащите пластиковый контейнер.

Вскройте пластиковый контейнер и вытащите дентальный имплантат с помощью имплантовода или стерильных перчаток.

22. Стерильность

Стерилизация производится газовым способом этиленоксидом в соответствии с режимом стерилизации, выбранным и утвержденным в рамках валидационных испытаний. Процесс стерилизации (окисью этилена) валидирован в соответствии с ГОСТ ISO 11135 и контролируется для каждой партии имплантатов.

Не проводите повторную стерилизацию.

Не используйте при открытой или поврежденной упаковке.

Не используйте после истечения срока годности.

23. Срок годности указан на упаковке

Не использовать после окончания срока годности.

Не использовать, если упаковка была открыта или повреждена.

24. Конструкция медицинского изделия

Резьба, расположена по всей длине имплантата (360°) обеспечивают прочность соединения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № учбл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		57

Копировал

Формат А4



Более подробное схематичное изображение с характеристиками представлено в Приложении В.

25. Условија и правила експлуатације

Изделие предназначено для использования в лечебных или лечебно-профилактических медицинских учреждениях.

В период эксплуатации изделия должны выполнять порядок и инструкции по применению.

Использовать только специалистами в данной области (высокоспециализированному медицинскому персоналу).

Не использовать при поврежденной упаковке.

Не подлежит повторной стерилизации.

Использовать с действующим сроком годности (сличать маркировку на упаковке: год-месяц).

Не предназначено для повторного использования.

26. Техническое обслуживание

Не требуется, изделие предназначено для одноразового использования (только для одного пациента).

27. Текущий ремонт

Не требуется, изделие предназначено для одноразового использования (только для одного пациента).

28. Уполномоченный представитель производителя в РФ, компания, принимающая претензии и предложения

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «НС Технология»
Сокращенное наименование юридического лица	ООО «НС Технология»
Идентификационный номер налогоплательщика	7447288920
Адрес места нахождения юридического лица	Россия, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.26Б, помещение 12. офис 101
Номера телефонов	+7 (351) 701-01-00
Адрес электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя	corp@nct.dental

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

Таблица А.1

Обозначение	Наименование документа	Номер подпункта ТУ, в котором дана ссылка
ГОСТ 8.051-81	Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.	5.3
ГОСТ 12.0.230-2007	Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования	3.3
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	3.3
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	3.3
ГОСТ 164-90	Штангенрейсмасы. Технические условия	5.3
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия	5.3
ГОСТ 577-68	Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия	5.3
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики	1.1.4
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия	5.3
ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия	1.5.5
ГОСТ 9378-93	Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия	5.5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

60

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № аут.	Подп. и дата

ГОСТ 10459-87	Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия	1.5.6
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	1.4.4
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в компоненты воздействия климатических факторов внешней среды	Введение, 1.1.8, 1.1.9, 1.11, 5.1, 5.9, 5.10, 6.2, 6.3, 7.3
Обозначение	Наименование документа	Номер подпункта ТУ, в котором дана ссылка
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия	1.5.6
ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции	4.3.2
ГОСТ 19300-86	Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры	5.5
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования	5.5
ГОСТ Р 50779.72-99	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 2. Планы выборочного контроля отдельных партий на основе предельного качества LQ	4.3.2
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний	5.7
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия	1.1.5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

61

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № аубл.	Подп. и дата

ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания	5.4
ГОСТ Р ИСО 14801-2012	Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для внутрикостных стоматологических имплантатов	1.1.13, 5.14
ГОСТ Р ИСО 14937-2012	Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	5.7
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования	1.4.2
Обозначение	Наименование документа	Номер подпункта ТУ, в котором дана ссылка
Стандарты серии ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.	1.1.6, 5.7
ГОСТ ISO 11135-2012	Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена	1.1.6
ОМУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытания	5.6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № аубл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		62

Копировал

Формат А4

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий	Введение
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами	3.1. 3.2
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности и методы испытаний.	5.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Вып. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											63

Копировал

Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее по ТУ 32.50.22-001-39072168-2020, варианты исполнения:

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее Синтес Про, размеры (диаметр x длина), заглушка (диаметр x длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская– 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат 3,6x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская– 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

64

Копировал

Формат А4

8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 3,6х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская- 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 3,6х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 3,6х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 3,6х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 3,6х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х7 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:
- имплантат 4,0х7 мм (заглушка 3,4х4,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. из убл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						65
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

19. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

20. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,0х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,0х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

21. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

22. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

23. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Посл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
												66

Копировал

Формат А4

25. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
26. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
27. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
28. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х20 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат 4,5х20 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
29. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 4,5х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат 4,5х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
30. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х4 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
 - имплантат 5,0х4 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
31. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х5 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
 - имплантат 5,0х5 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
32. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х6 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
 - имплантат 5,0х6 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
33. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № аубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
67

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

34. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

35. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

36. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

37. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 5,0х14 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат 5,0х14 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

38. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 6,0х4 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат 6,0х4 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

39. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 6,0х5 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат 6,0х5 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

40. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

41. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 6,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 6,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № уч.бл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						68
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

42. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

43. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 7,0х4 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат 7,0х4 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

44. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 7,0х5 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат 7,0х5 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

45. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 7,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат 7,0х6 мм (заглушка 4х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

46. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

47. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 7,0х7 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

48. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про 7,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат 7,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

49. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про (короткий) 5х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5х4 мм (заглушка 3х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

50. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3х3 мм)- 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № оц.л.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						69
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

51. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Синтес Про (короткий) 6,0х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 6,0х4 мм (заглушка 3х3 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

52. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х8 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х8 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

53. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х10 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х10 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

54. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х12 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х12 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

55. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х14 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х14 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

56. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х16 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х16 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

57. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х18 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х18 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

58. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0х20 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х20 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Зам. инв. №	Инв. № убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
70

Копировал

Формат А4

59. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0x22 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x22 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

60. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки Синтес Про (узкий) 3,0x24 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x24 мм- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

II. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ, размеры (диаметр x длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская- 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					71

Копировал

Формат А4

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
72

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

19. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

20. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

21. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

22. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

23. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											73

Копировал

Формат А4

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
25. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
26. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
27. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
28. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
29. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
30. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
31. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению- 1 шт.
32. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм)- 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											74

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

33. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x8 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x8 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

34. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x10 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x10 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

35. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x12 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x12 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

36. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 5,0x14 мм (заглушка 3,8x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0x14 мм (заглушка 3,8x5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.

37. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x6 мм(заглушка 4x3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x6 мм(заглушка 4x3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

38. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x7 мм (заглушка 4x3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x7 мм (заглушка 4x3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

39. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

40. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв.
Убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
75

Копировал

Формат А4

41. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (стандарт) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
42. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х6 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х6 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
43. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х7мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х7 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
44. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х8 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х8 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
45. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х10 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х10 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
46. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х12 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х12 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
47. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х14 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х14 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
48. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х16 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х16 мм - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
49. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х18 мм в составе:
 - имплантат (узкий) 3,0х18 мм - 1 шт.;

инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв.
убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
76

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

50. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х20 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х20 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

51. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х22 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х22 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

52. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (узкий) 3,0х24 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х24 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

53. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (короткий) 5х4 мм (заглушка 3,0х3,0 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5х4 мм (заглушка 3,0х3,0 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

54. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3,0х3,0 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3,0х3,0 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

55. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (короткий) 6,0х4 мм (заглушка 3,0х3,0 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 6,0х4 мм (заглушка 3,0х3,0 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

56. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 2,5х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

57. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 2,5х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Инв. №	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			77

Копировал

Формат А4

58. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 2,5х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

59. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 3,0х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

60. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 3,0х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

61. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ (одноэтапный) 3,0х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

62. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

63. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

64. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм)- 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

65. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

66. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист
										78
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

67. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

68. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

69. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

70. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

71. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

72. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

73. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

74. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № учб.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		79

Копировал

Формат А4

75. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

76. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

77. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

78. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

79. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

80. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

81. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

82. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

83. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

80

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

84. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

85. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

86. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

87. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

88. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

89. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

90. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

91. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

81

Копировал

Формат А4

92. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
- имплантат (про) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
93. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
94. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
95. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
96. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
97. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
98. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
- имплантат (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
99. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
- имплантат (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
100. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
- имплантат (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. №
Подп. и дата	Убл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

82

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

101. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0x8 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

102. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0x10 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

103. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ (про) 6,0x12 мм (заглушка 4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0x12 мм (заглушка 4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

III. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ Нанотитан, размеры (диаметр x длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x6 мм (заглушка 3,4x3,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x7 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		83

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											84

Копировал

Формат А4

14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x8 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x10 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x12 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x14 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x16 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

19. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x18 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x18 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

20. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x20 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x20 мм (заглушка 3,4x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

21. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,0x22 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,0x22 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

22. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5x6 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5x6 мм (заглушка 3,6x5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											85

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

23. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

25. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

26. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

27. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

28. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

29. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

30. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Изм.	№ подл.	Подп. и дата	Взам. ин.з. №	Инв. № субл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

86

Копировал

Формат А4

31. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

32. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

33. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

34. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

35. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

36. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

37. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

38. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

39. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

87

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

40. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

41. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 6,0х10 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х10 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

42. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (стандарт) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

43. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (короткий) 5х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5х4 мм (заглушка 3х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

44. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 5,5х4 мм (заглушка 3х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

45. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (короткий) 6,0х4 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (короткий) 6,0х4 мм (заглушка 3х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

46. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0х6 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х6 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

47. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0х7мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0х7мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
88

Копировал

Формат А4

48. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x8 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x8 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

49. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x10 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

50. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x12 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

51. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x14 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

52. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x16 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x16 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

53. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x18 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x18 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

54. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x20 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x20 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

55. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x22 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x22 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

56. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (узкий) 3,0x24 мм в составе:

- имплантат (узкий) 3,0x24 мм - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						89
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

57. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (одноэтапный) 2,5х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

58. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (одноэтапный) 2,5х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

59. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (одноэтапный) 2,5х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 2,5х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

60. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (одноэтапный) 3,0х10 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х10 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

61. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (одноэтапный) 3,0х12 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х12 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

62. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный без заглушки НСТ Нанотитан (одноэтапный) 3,0х14 мм в составе:

- имплантат (одноэтапный) 3,0х14 мм - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

63. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

64. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х7 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № уч.зл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

90

Копировал

Формат А4

65. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

66. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

67. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

68. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

69. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

70. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

71. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

72. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

73. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х6 мм (заглушка 3,4х4,5 мм) - 1 шт.;

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

91

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

74. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х7 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

75. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

76. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

77. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

78. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

79. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

80. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

81. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,0х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин.з. "в" субл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
											92

Копировал

Формат А4

82. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,0х22 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
83. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х6 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
84. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
85. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х7 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
86. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х8 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
87. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х10 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
88. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х12 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
89. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х14 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
90. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (про) 4,5х16 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № учбл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						93
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

91. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х18 мм (заглушка 3,6х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

92. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х20 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

93. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 4,5х22 мм (заглушка 3,8х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

94. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х6 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

95. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х7 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

96. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х8 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

97. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х10 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

98. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х12 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
94

Копировал

Формат А4

99. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 5,0х14 мм (заглушка 3,8х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

100. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х6 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

101. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х7 мм (заглушка 4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

102. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х8 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

103. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х10 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х10 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

104. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ Нанотитан (про) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (про) 6,0х12 мм (заглушка 4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

IV. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест, размеры (диаметр х длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,3х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,3х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ					Лист	
										95	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 4,3х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 4,3х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х13 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
10. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 3,5х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 3,5х15 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
 - упаковка потребительская – 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
11. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:
 - имплантат (стандарт) 5,0х4 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № учбл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

96

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

12. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0х6 мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

13. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

14. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 5,0х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 5,0х10 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

15. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х4мм (заглушка 3х2,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х4мм (заглушка 3х2,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

16. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х6 мм (заглушка 3х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х6 мм (заглушка 3х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

17. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х8 мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест (стандарт) 6,0х10мм (заглушка 3х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 6,0х10мм (заглушка 3х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

V. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911, размеры (диаметр х длина):

1. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;

Инд.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд.	Подп. и дата
Инд.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд.	Подп. и дата
Инд.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд.	Подп. и дата
Инд.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд.	Подп. и дата
Инд.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

97

Копировал

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х8 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х8 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

5. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х14 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х16 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

7. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

8. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

9. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 3,5х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № инв.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
98

Копировал

Формат А4

18. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:
- имплантат (стандарт) 4,1х18 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № - усл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

99

Формат А4

- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

19. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,1х20 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

20. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,1х22 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

21. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,1х24 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,1х24 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

22. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х6 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

23. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,5х7 мм (заглушка 3,4х3 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х7 мм (заглушка 3,4х3 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

24. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х8 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

25. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х10 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

26. Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911 4,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) в составе:

- имплантат (стандарт) 4,5х12 мм (заглушка 3,4х5,5 мм) - 1 шт.;
- упаковка потребительская – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	убл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
												100

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № -убл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
101

Копировал

Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В1 Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее Синтес Про

Основные размеры (диаметр (А) х длина (В) (мм) и масса (г) имплантата указаны в Таблице В.1

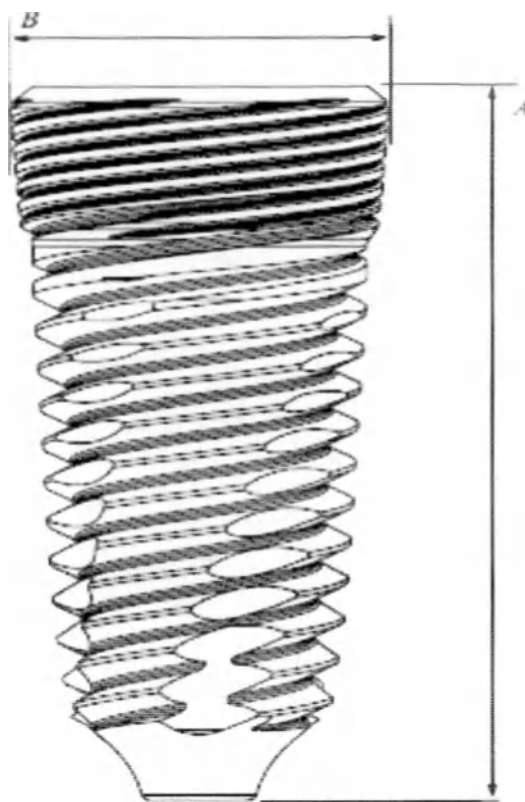


рис. 1

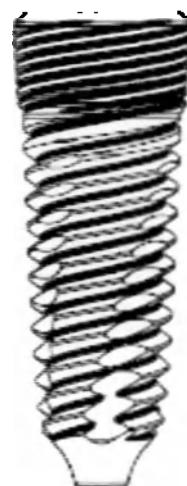
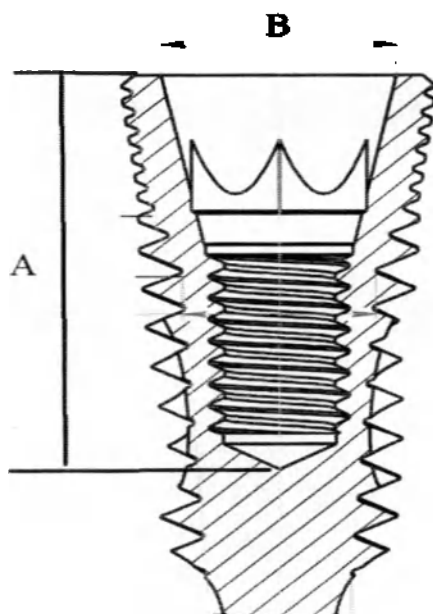


рис. 2



рис. 3

рис. 1 - Стандарт
рис. 2 - Углуб.
рис. 3 - Короткий

Инв. №	№ посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
102

Копировал

Формат А4

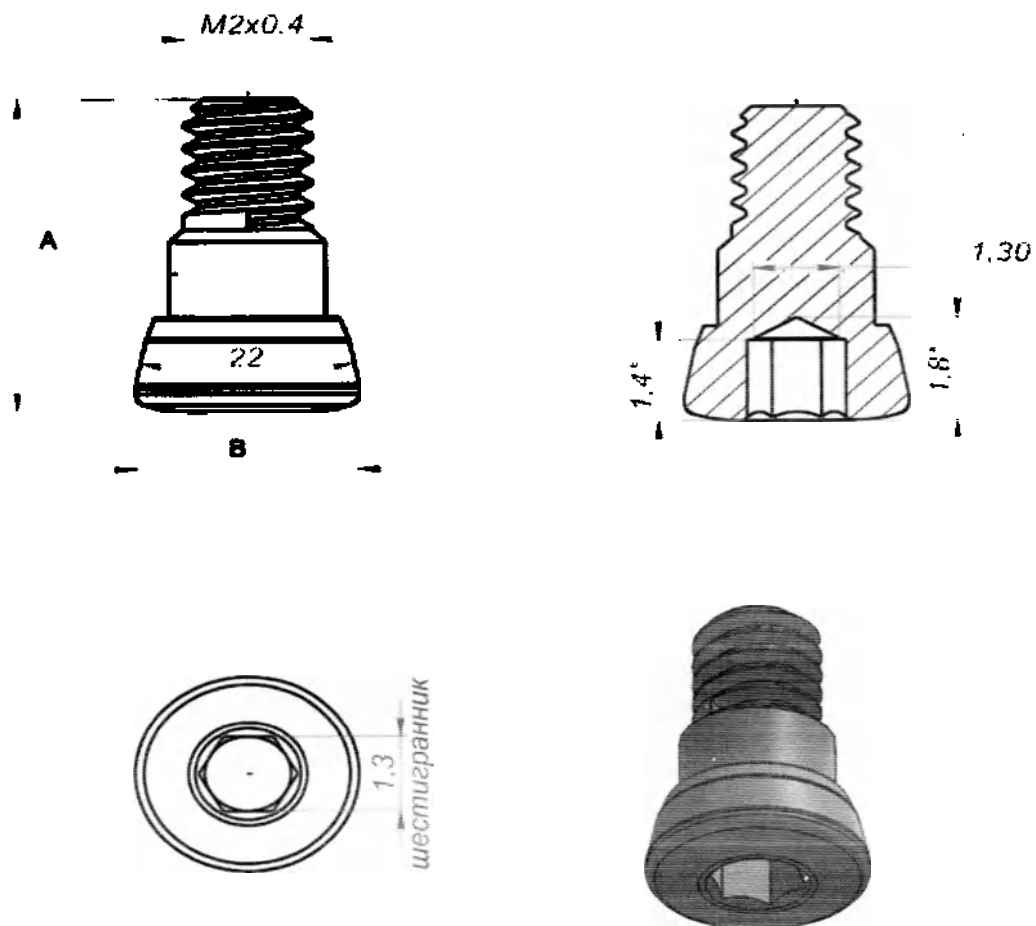


рис. 4 - Заглушка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Гидр. и дата
Инв. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
КДНДИ.121416.101-00.ИЭ				Лист
				103

Копировал

Формат А4

Рис. В2 Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ

Основные размеры (диаметр (А) х длина (В) (мм) и масса (г) имплантата указаны в Таблице В.1

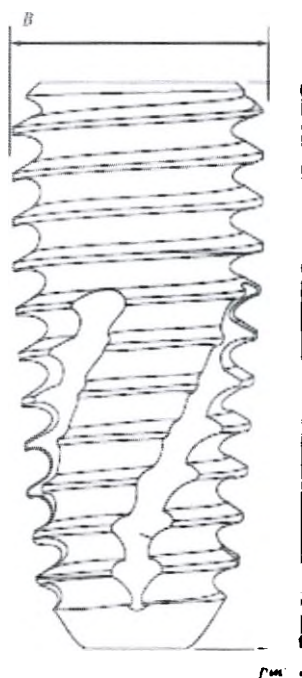


рис. 1 - Про
рис. 2 - Стандарт
рис. 3 - Короткий
рис. 4 - Узкий
рис. 5 - Одноэтапный
рис. 6 - Заглушка

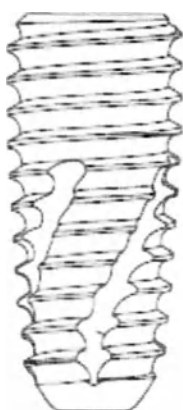


рис. 2



рис. 3



рис. 4


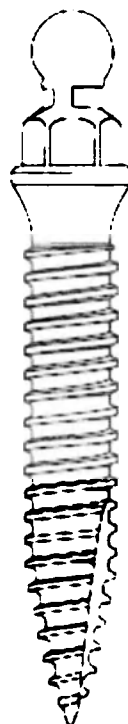


рис. 5

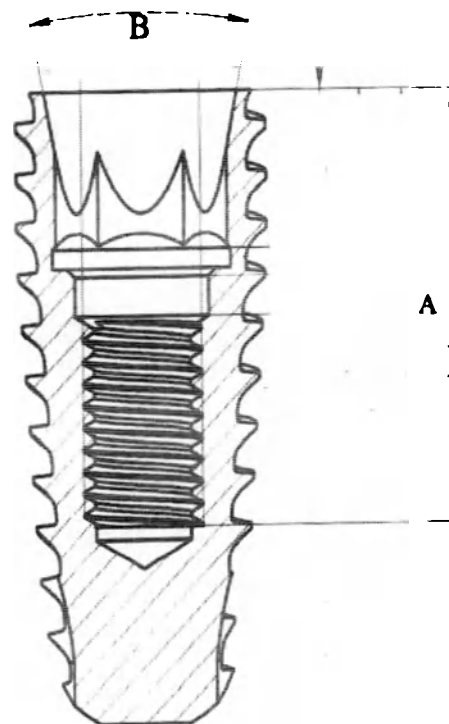

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

104

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

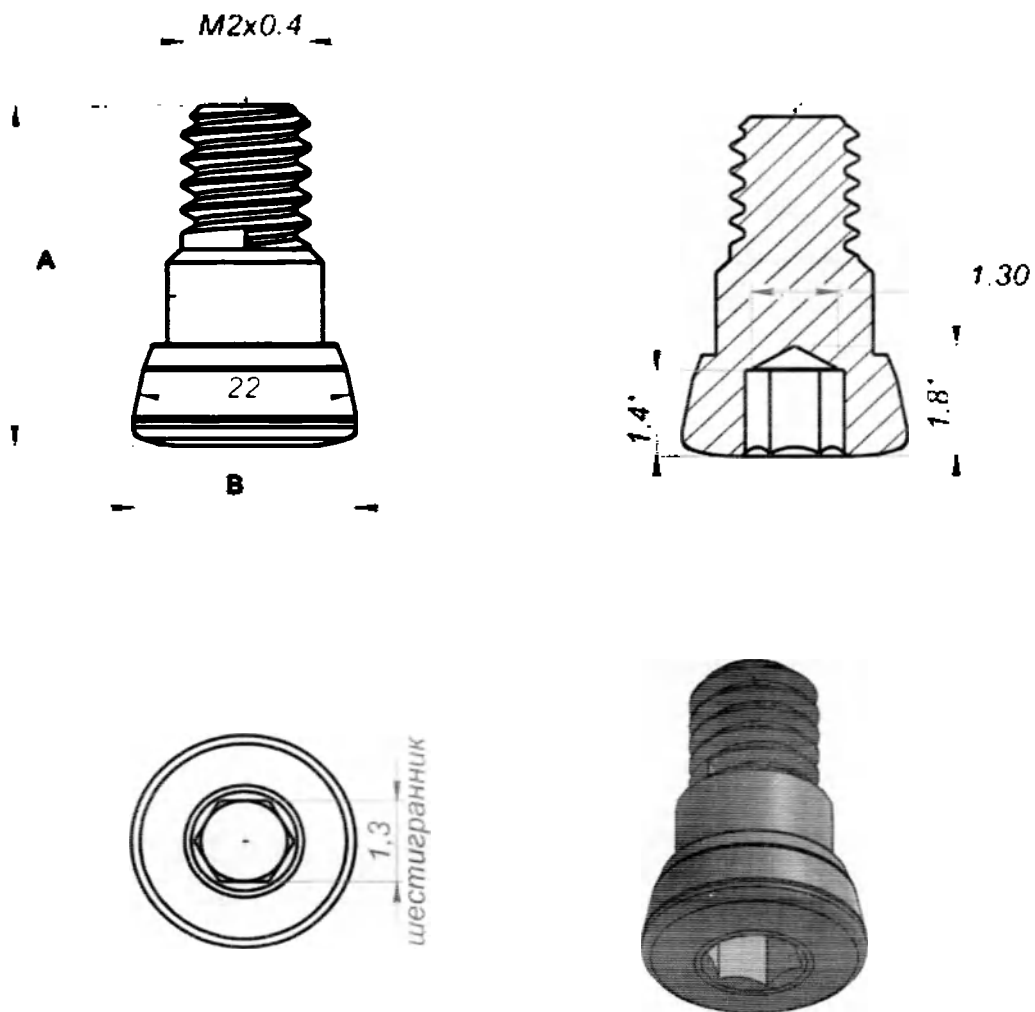


рис. 6


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Лист	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ
					Лист 105

Копировал

Формат А4

Рис. В3 Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ Нанотитан

Основные размеры (диаметр (А) х длина (В) (мм) и масса (г) имплантата указаны в Таблице В.1

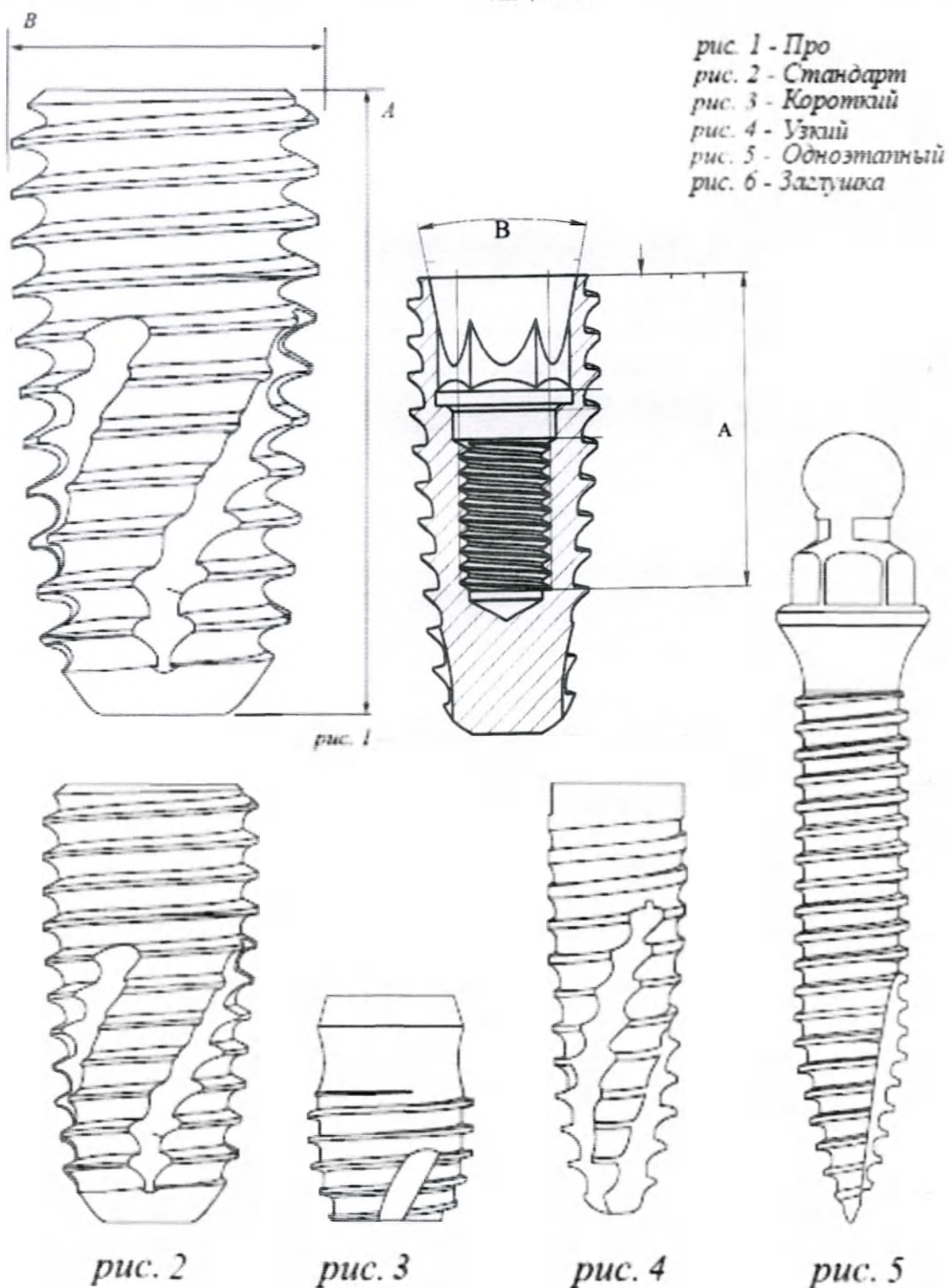

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	Убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

106

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. ... усл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировать

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Формат А4

Лист 1

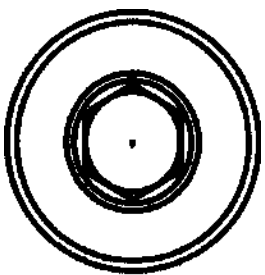

1.3
шестигранник

рис. 6




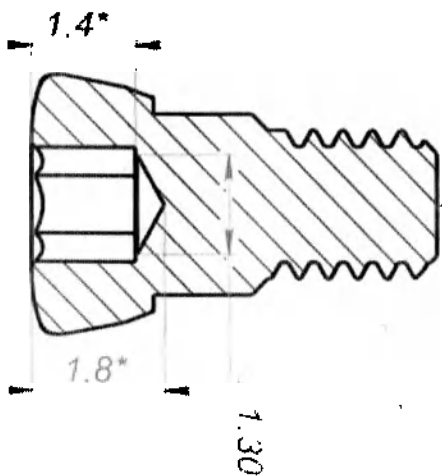


Рис. В4 Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест
Основные размеры (диаметр (А) х длина (В) (мм) и масса (г) имплантата указаны в Таблице В.1

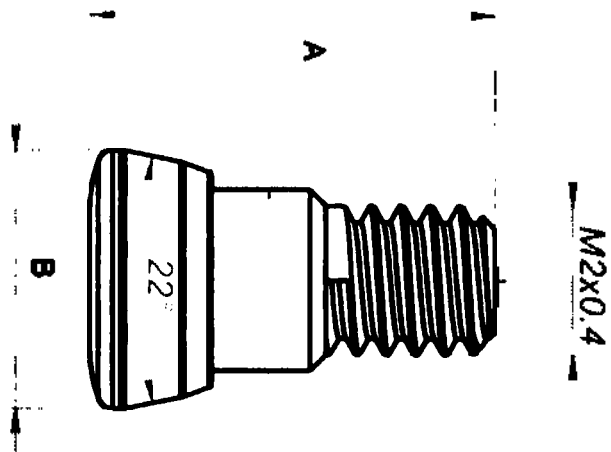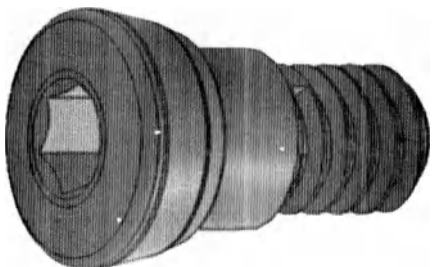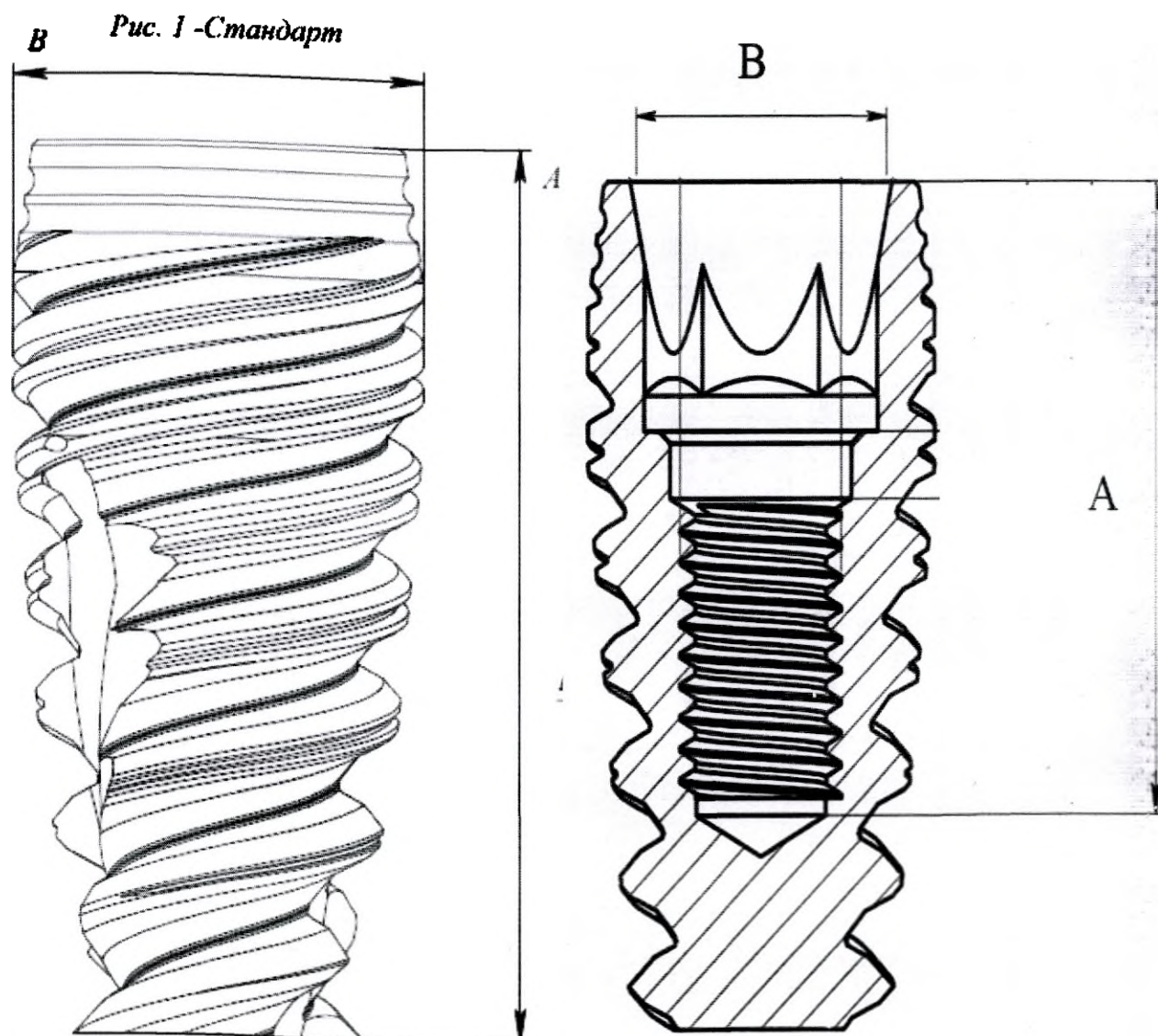

Изм.	№ подл.	Подп. и дата	Зам. инж. №	Инж. ... убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
108

Копировал

Формат А4


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал



КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Формат А4

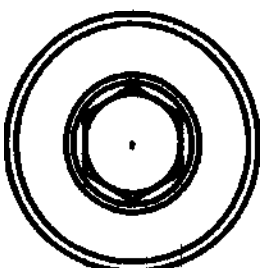

1.3
шестигранник

Рис. 2 Заглушка

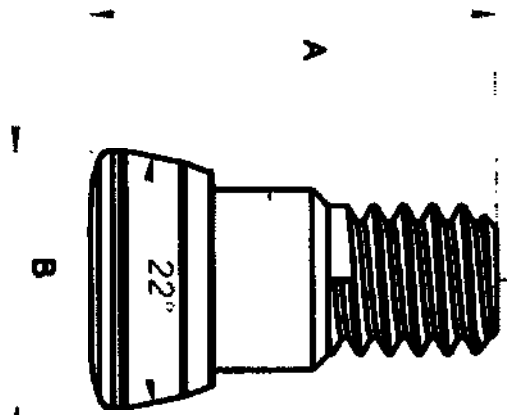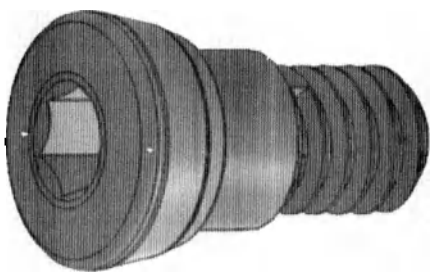

M2x0.4


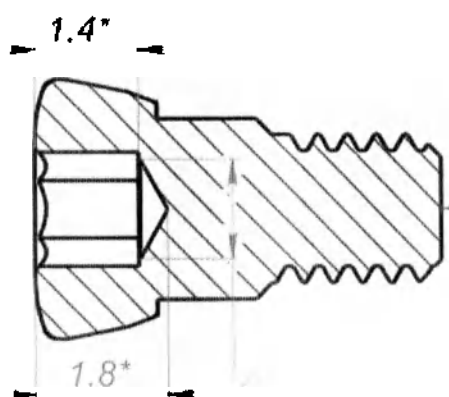


Рис. В5 Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911

Основные размеры (диаметр (А) x длина (В) (мм) и масса (г) имплантата указаны в Таблице В.1

Рис. 1 - Стандарт

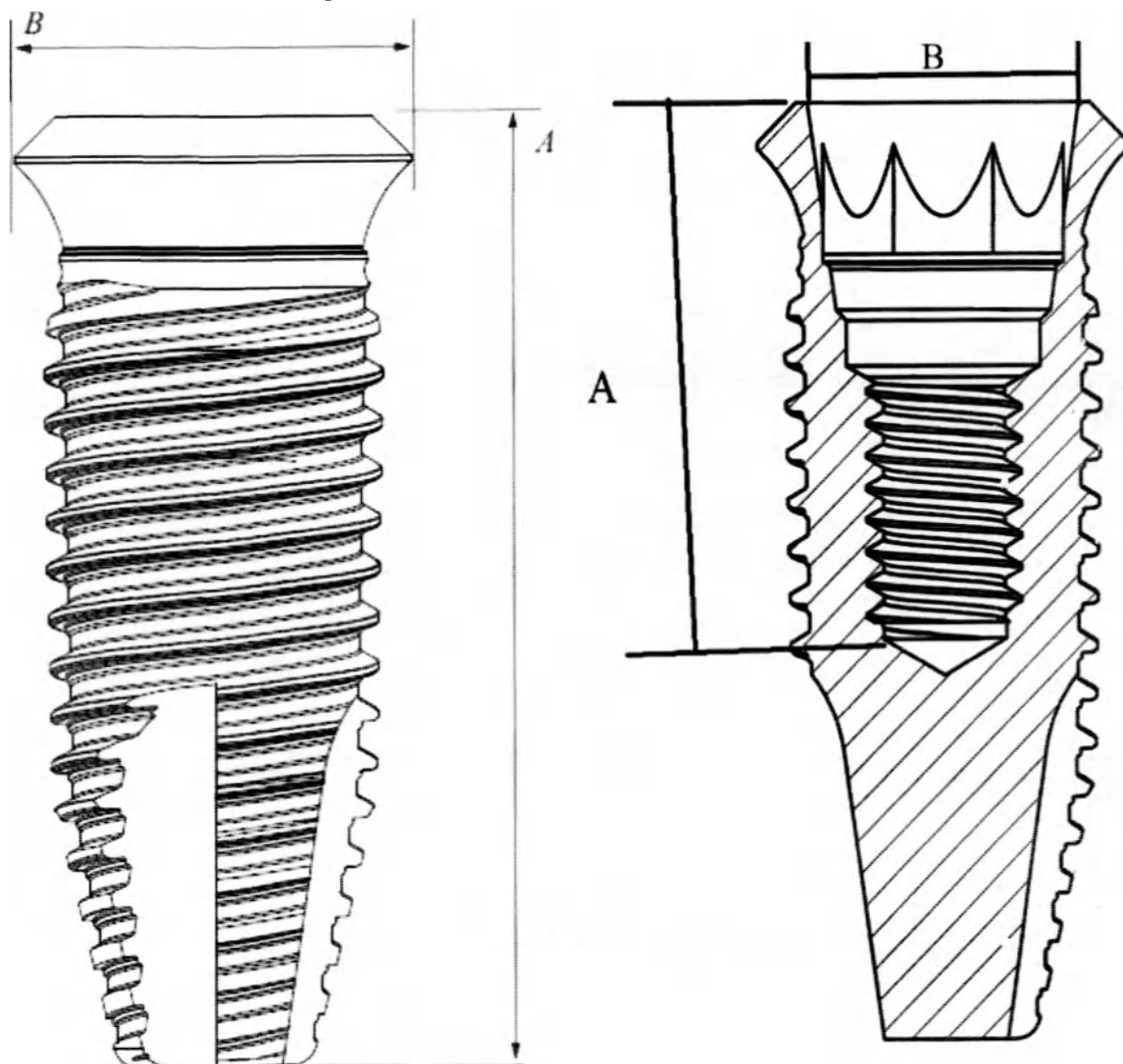

Изм.	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инж. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
110

Копировал

Формат А4

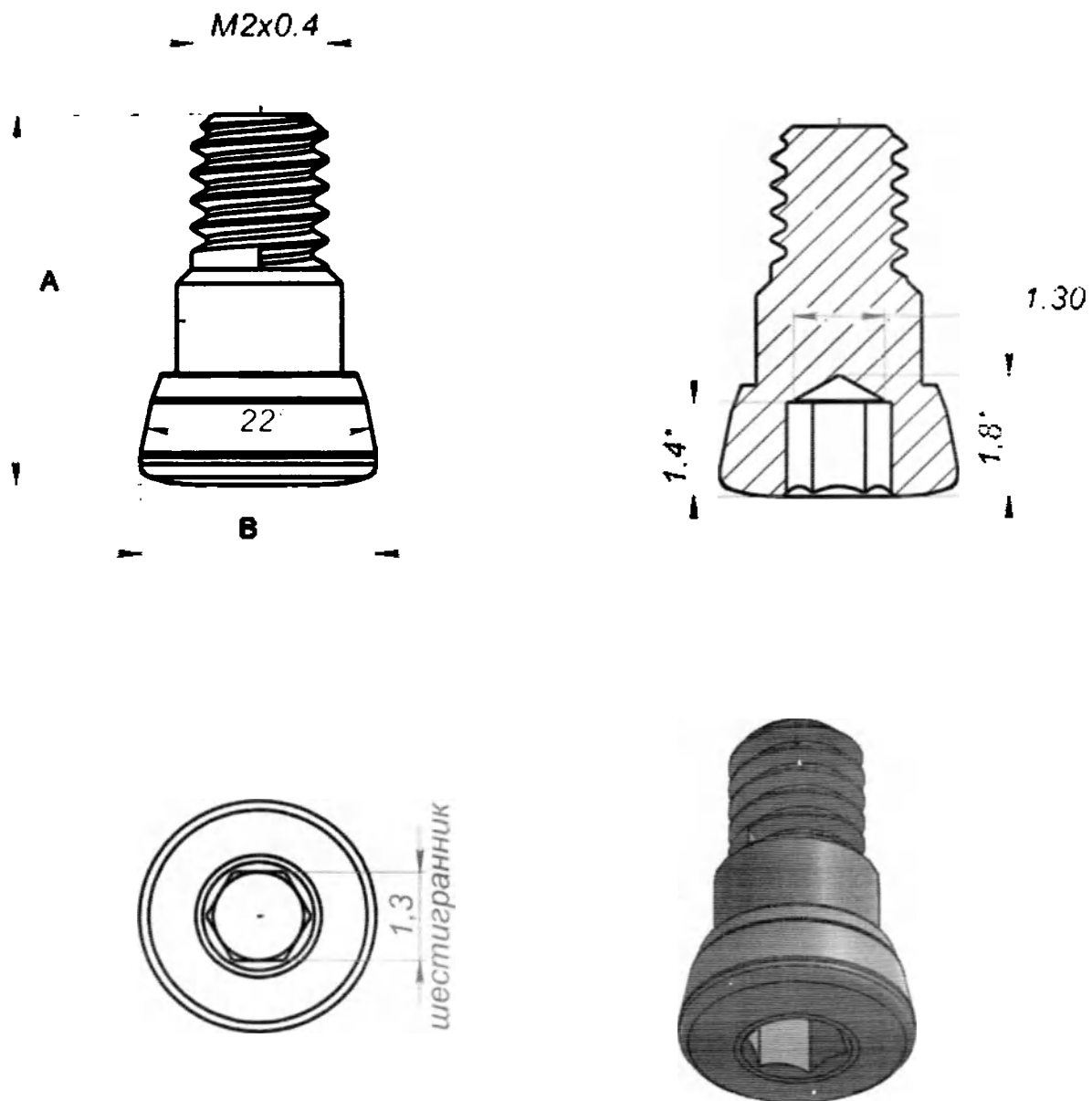


Рис. 2 Заглушка

Изм.	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист
111

Копировал

Формат А4

Таблица В.1 Основные размеры и масса имплантата и заглушки.

Размер им-плантат, мм	Размер за-глушка, мм	Номер КД	Масса им-плантата, г	Масса за-глушки, г	Метод обработки
Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, одноконтентный в комплекте с заглушкой или без нее Синтез Про, размеры (диаметр (А) х длина (В)):					
3,6x6	3,4x3,5	КДНДИ.121416.101.00.01	1,0	0,67	Кислотное травление
3,6x7	3,4x5,5		1,0	0,71	
3,6x8	3,4x5,5		1,11	0,71	
3,6x10	3,4x5,5		0,18	0,71	
3,6x12	3,4x5,5		1,5	0,71	
3,6x14	3,4x5,5		1,5	0,71	
3,6x16	3,4x5,5		1,5	0,71	
3,6x18	3,4x5,5		1,6	0,71	
3,6x20	3,4x5,5		1,7	0,71	
3,6x22	3,4x5,5		1,8	0,71	
4,0x7	3,4x4,5		1,0	0,71	
4,0x8	3,4x5,5		1,0	0,71	
4,0x10	3,4x5,5		1,11	0,71	
4,0x12	3,4x5,5		1,5	0,71	
4,0x14	3,4x5,5		1,5	0,71	
4,0x16	3,4x5,5		1,5	0,71	
4,0x18	3,4x5,5		1,5	0,71	
4,0x20	3,4x5,5		1,6	0,71	
4,0x22	3,4x5,5		1,7	0,71	
4,5x7	3,6x5,5		1,8	0,73	
4,5x8	3,6x5,5		1,0	0,73	
4,5x10	3,6x5,5		1,0	0,73	
4,5x12	3,6x5,5		1,11	0,73	
4,5x14	3,6x5,5		1,5	0,73	
4,5x16	3,6x5,5		1,5	0,73	
4,5x20	3,6x5,5		1,5	0,73	
4,5x22	3,6x5,5		1,5	0,73	
5,0x4	3,8x3		1,2	0,67	
5,0x5	3,8x3		1,2	0,67	
5,0x6	3,8x3		1,3	0,67	
5,0x7	3,8x5,5		1,3	0,75	
5,0x8	3,8x5,5		1,5	0,75	
5,0x10	3,8x5,5		1,5	0,75	
5,0x12	3,8x5,5		1,6	0,75	
5,0x14	3,8x3		1,6	0,75	
6,0x4	4x3		1,4	0,7	
6,0x5	4x3		1,4	0,7	
6,0x6	4x3		1,6	0,7	
6,0x7	4x5,5		1,6	0,75	
6,0x8	4x5,5		1,6	0,75	

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

112

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

7,0x4	4x3		1,5	0,7
7,0x5	4x3		1,6	0,7
7,0x6	4x3		1,8	0,7
7,0x7	4x5,5		1,9	0,75
7,0x8	4x5,5		2,0	0,75

- короткий:

5x4	3x3	КДНДИ.121416.101.00.02	2,0	0,62
5,5x4	3x3		2,0	0,62
6,0x4	3x3		2,0	0,62

- узкий (без заглушки):

3,0x8	-	КДНДИ.121416.101.00.03	1,0	-
3,0x10	-		1,8	-
3,0x12	-		1,0	-
3,0x14	-		1,0	-
3,0x16	-		1,2	-
3,0x18	-		1,3	-
3,0x20	-		1,5	-
3,0x22	-		1,6	-
3,0x24	-		1,8	-

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ, размеры (диаметр (А) х длина (В)):

- стандарт:

3,5x6	3,4x3,5	КДНДИ.121416.101.00.04	1,0	0,67
3,5x7	3,4x5,5		1,0	0,71
3,5x8	3,4x5,5		1,11	0,71
3,5x10	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x12	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x14	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x16	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x18	3,4x5,5		1,6	0,71
3,5x20	3,4x5,5		1,7	0,71
3,5x22	3,4x5,5		1,8	0,71
4,0x6	3,4x4,5		1,0	0,69
4,0x7	3,4x5,5		1,0	0,71
4,0x8	3,4x5,5		1,11	0,71
4,0x10	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x12	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x14	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x16	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x18	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x20	3,4x5,5		1,6	0,71
4,0x22	3,6x5,5		1,7	0,73
4,5x6	3,6x5,5		1,0	0,73
4,5x7	3,6x5,5		1,0	0,73
4,5x8	3,6x5,5		1,11	0,73
4,5x10	3,6x5,5		1,5	0,73
4,5x12	3,6x5,5		1,5	0,73
4,5x14	3,6x5,5		1,6	0,73
4,5x16	3,6x5,5		1,71	0,73

Кислотное травление

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	убл.	Полн. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

113

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. ... Зубл.	Подп. и дата

4,5x18	3,6x5,5		1,7	0,73
4,5x20	3,8x3		1,7	0,73
4,5x22	3,8x3		1,8	0,73
5,0x6	3,8x5,5		1,0	0,67
5,0x7	3,8x5,5		1,0	0,75
5,0x8	3,8x5,5		1,11	0,75
5,0x10	3,8x5,5		1,5	0,75
5,0x12	3,8x5,5		1,5	0,75
5,0x14	3,8x5,5		1,5	0,75
6,0x6	4x3		1,0	0,7
6,0x7	4x3		1,0	0,7
6,0x8	4x5,5		1,11	0,7
6,0x10	4x5,5		1,5	0,7
6,0x12	4x5,5		1,5	0,7
- узкий (без заглушки):				
3,0x6	-	КДНДИ.121416.101.00.05	1,0	-
3,0x7	-		1,0	-
3,0x8	-		1,0	-
3,0x10	-		1,2	-
3,0x12	-		1,3	-
3,0x14	-		1,5	-
3,0x16	-		1,7	-
3,0x18	-		1,9	-
3,0x20	-		2,0	-
3,0x22	-		2,2	-
3,0x24	-	2,4	-	
- короткий:				
5x4	3,0x3,0	КДНДИ.121416.101.00.06	2,0	0,62
5,5x4	3,0x3,0		2,0	0,62
6,0x4	3,0x3,0		0,52	0,62
- одноэтапный (без заглушки):				
2,5x10	-	КДНДИ.121416.101.00.07	1,2	-
2,5x12	-		1,2	-
2,5x14	-		1,4	-
3,0x10	-		1,4	-
3,0x12	-		1,4	-
3,0x14	-		1,5	-
- про:				
3,5x6	3,4x3,5	КДНДИ.121416.101.00.08	1,0	0,67
3,5x7	3,4x5,5		1,0	0,71
3,5x8	3,4x5,5		1,11	0,71
3,5x10	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x12	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x14	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x16	3,4x5,5		1,0	0,71
3,5x18	3,4x5,5		1,0	0,71
3,5x20	3,4x5,5		1,11	0,71
3,5x22	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x6	3,4x4,5		1,5	0,69

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

114

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Издп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	Убл.	Подп. и дата

4,0x7	3,4x5,5	1,5	0,71
4,0x8	3,4x5,5	1,0	0,71
4,0x10	3,4x5,5	1,0	0,71
4,0x12	3,4x5,5	1,11	0,71
4,0x14	3,4x5,5	1,5	0,71
4,0x16	3,4x5,5	1,5	0,71
4,0x18	3,4x5,5	1,5	0,71
4,0x20	3,4x5,5	1,7	0,71
4,0x22	3,6x5,5	1,8	0,73
4,5x6	3,6x5,5	1,11	0,73
4,5x7	3,6x5,5	1,5	0,73
4,5x8	3,6x5,5	1,5	0,73
4,5x10	3,6x5,5	1,5	0,73
4,5x12	3,6x5,5	1,6	0,73
4,5x14	3,6x5,5	1,6	0,73
4,5x16	3,6x5,5	1,71	0,73
4,5x18	3,6x5,5	1,7	0,73
4,5x20	3,8x3	1,7	0,73
4,5x22	3,8x3	1,8	0,73
5,0x6	3,8x5,5	1,0	0,67
5,0x7	3,8x5,5	1,0	0,75
5,0x8	3,8x5,5	1,11	0,75
5,0x10	3,8x5,5	1,5	0,75
5,0x12	3,8x5,5	1,5	0,75
5,0x14	3,8x5,5	1,5	0,75
6,0x6	4x3	1,0	0,7
6,0x7	4x3	1,0	0,7
6,0x8	4x5,5	1,11	0,7
6,0x10	4x5,5	1,5	0,7
6,0x12	4x5,5	1,5	0,7

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой или без нее НСТ Нанотитан, размеры (диаметр (А) x длина (В)):

- стандарт:

3,5x6	3,4x3,5	КДНДИ.121416.101.00.09	1,0	0,67
3,5x7	3,4x5,5		1,0	0,71
3,5x8	3,4x5,5		1,11	0,71
3,5x10	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x12	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x14	3,4x5,5		1,5	0,71
3,5x16	3,4x5,5		1,6	0,71
3,5x18	3,4x5,5		1,7	0,71
3,5x20	3,4x5,5		1,8	0,71
3,5x22	3,4x5,5		1,9	0,71
4,0x6	3,4x4,5		1,0	0,69
4,0x7	3,4x5,5		1,0	0,71
4,0x8	3,4x5,5		1,11	0,71
4,0x10	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x12	3,4x5,5		1,5	0,71
4,0x14	3,4x5,5		1,5	0,71

Лазерное покрытие

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

115

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв	Эубл.	Подп. и дата

4,0x16	3,4x5,5		1,6	0,71
4,0x18	3,4x5,5		1,7	0,71
4,0x20	3,4x5,5		1,8	0,71
4,0x22	3,6x5,5		1,9	0,73
4,5x6	3,6x5,5		1,0	0,73
4,5x7	3,6x5,5		1,0	0,73
4,5x8	3,6x5,5		1,11	0,73
4,5x10	3,6x5,5		1,5	0,73
4,5x12	3,6x5,5		1,5	0,73
4,5x14	3,6x5,5		1,5	0,73
4,5x16	3,6x5,5		1,7	0,73
4,5x18	3,6x5,5		1,8	0,73
4,5x20	3,8x3		1,9	0,73
4,5x22	3,8x3		2,0	0,73
5,0x6	3,8x5,5		1,0	0,67
5,0x7	3,8x5,5		1,0	0,75
5,0x8	3,8x5,5		1,11	0,75
5,0x10	3,8x5,5		1,5	0,75
5,0x12	3,8x5,5		1,5	0,75
5,0x14	3,8x5,5		1,5	0,75
6,0x6	4x3		1,0	0,7
6,0x7	4x3		1,0	0,7
6,0x8	4x5,5		1,11	0,7
6,0x10	4x5,5		1,5	0,7
6,0x12	4x5,5		1,5	0,7

- короткий:

5x4	3x3	КДНДИ.121416.101.00.10	2,0	0,62
5,5x4	3x3		2,0	0,62
6,0x4	3x3		2,0	0,62

- узкий (без заглушки):

3,0x6	-	КДНДИ.121416.101.00.11	1,4	-
3,0x7	-		1,4	-
3,0x8	-		1,5	-
3,0x10	-		1,7	-
3,0x12	-		1,8	-
3,0x14	-		1,7	-
3,0x16	-		1,7	-
3,0x18	-		1,8	-
3,0x20	-		1,9	-
3,0x22	-		2,0	-
3,0x24	-		2,1	-

- одноэтапный (без заглушки):

2,5x10	-	КДНДИ.121416.101.00.12	1,2	-
2,5x12	-		1,2	-
2,5x14	-		1,4	-
3,0x10	-		1,4	-
3,0x12	-		1,4	-
3,0x14	-		1,5	-

- про:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

116

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. ...	Зубл.	Подп. и дата

3,5x6	3,4x3	КДНДИ.121416.101.00.13	1,0	0,67			
3,5x7	3,4x3		1,0	0,71			
3,5x8	3,4x5,5		1,11	0,71			
3,5x10	3,4x5,5		1,5	0,71			
3,5x12	3,4x5,5		1,5	0,71			
3,5x14	3,4x5,5		1,5	0,71			
3,5x16	3,4x5,5		1,0	0,71			
3,5x18	3,4x5,5		1,0	0,71			
3,5x20	3,4x5,5		1,11	0,71			
3,5x22	3,4x5,5		1,5	0,71			
4,0x6	3,4x4,5		1,5	0,69			
4,0x7	3,4x5,5		1,5	0,71			
4,0x8	3,4x5,5		1,0	0,71			
4,0x10	3,4x5,5		1,0	0,71			
4,0x12	3,4x5,5		1,11	0,71			
4,0x14	3,4x5,5		1,5	0,71			
4,0x16	3,4x5,5		1,5	0,71			
4,0x18	3,4x5,5		1,5	0,71			
4,0x20	3,4x5,5		1,7	0,71			
4,0x22	3,6x5,5		1,8	0,73			
4,5x6	3,6x5,5		1,11	0,73			
4,5x7	3,6x5,5		1,5	0,73			
4,5x8	3,6x5,5		1,5	0,73			
4,5x10	3,6x5,5		1,5	0,73			
4,5x12	3,6x5,5		1,6	0,73			
4,5x14	3,6x5,5		1,6	0,73			
4,5x16	3,6x5,5		1,71	0,73			
4,5x18	3,6x5,5		1,7	0,73			
4,5x20	3,8x3		1,7	0,73			
4,5x22	3,8x3		1,8	0,73			
5,0x6	3,8x5,5		1,0	0,67			
5,0x7	3,8x5,5		1,0	0,75			
5,0x8	3,8x5,5		1,11	0,75			
5,0x10	3,8x5,5		1,5	0,75			
5,0x12	3,8x5,5		1,5	0,75			
5,0x14	3,8x5,5		1,5	0,75			
6,0x6	4x3		1,0	0,7			
6,0x7	4x3		1,0	0,7			
6,0x8	4x5,5		1,11	0,7			
6,0x10	4x5,5		1,5	0,7			
6,0x12	4x5,5		1,5	0,7			
Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой Эверест, размеры (диаметр (А) x длина (В)):							
- стандарт:							
4,3x4	3x2,5	КДНДИ.121416.101.00.14	1,1	0,42	Пескоструйная обработка		
4,3x6	3x2,5		1,1	0,42			
4,3x8	3x5,5		1,2	0,69			
4,3x10	3x5,5		1,2	0,69			

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист 117
------	------	----------	-------	------	------------------------	-------------

4,3x13	3x5,5	1,2	0,69
4,3x15	3x5,5	1,2	0,69
3,5x8	3x5,5	1,1	0,69
3,5x10	3x5,5	1,2	0,69
3,5x13	3x5,5	1,2	0,69
3,5x15	3x5,5	1,2	0,69
5,0x4	3x2,5	1,3	0,42
5,0x6	3x2,5	1,4	0,42
5,0x8	3x5,5	1,5	0,69
5,0x10	3x5,5	1,5	0,69
6,0x4	3x2,5	1,7	0,42
6,0x6	3x3	1,9	0,45
6,0x8	3x5,5	1,9	0,69
6,0x10	3x5,5	2,0	0,69

Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный в комплекте с заглушкой НСТ 911, размеры (диаметр (А) x длина (В)):

3,5x6	3,4x3	КДНДИ.121416.101.00.15	1,0	0,67	Пескоструйная обработка
3,5x8	3,4x3		1,1	0,67	
3,5x10	3,4x5,5		1,1	0,71	
3,5x12	3,4x5,5		1,2	0,71	
3,5x14	3,4x5,5		1,4	0,71	
3,5x16	3,4x5,5		1,6	0,71	
3,5x18	3,4x5,5		1,8	0,71	
3,5x20	3,4x5,5		2,0	0,71	
3,5x22	3,4x5,5		2,2	0,71	
3,5x24	3,4x5,5		2,4	0,71	
4,1x6	3,4x3		1,0	0,67	
4,1x8	3,4x5,5		1,1	0,71	
4,1x10	3,4x5,5		1,1	0,71	
4,1x12	3,4x5,5		1,2	0,71	
4,1x14	3,4x5,5		1,4	0,71	
4,1x16	3,4x5,5		1,6	0,71	
4,1x18	3,4x5,5		1,8	0,71	
4,1x20	3,4x5,5		2,0	0,71	
4,1x22	3,4x5,5		2,2	0,71	
4,1x24	3,4x5,5		2,4	0,71	
4,5x6	3,4x3		1,2	0,67	
4,5x7	3,4x3		1,3	0,67	
4,5x8	3,4x5,5		1,4	0,71	
4,5x10	3,4x5,5		1,6	0,71	
4,5x12	3,4x5,5		1,8	0,71	

Основные размеры и масса вариантов имплантата и заглушки должны соответствовать таблице В.1.

Параметры внутреннего диаметра и длины имплантата соответствуют параметрам внешнего диаметра и длине заглушки учитывая допустимые отклонения линейных характеристик $\pm 5\%$ и допустимое отклонение массы изделия $\pm 2\%$.

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

118

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Параметры высоты головки заглушки распространяются на все варианты исполнения медицинского изделия и составляет 1,5 мм. учитывая допустимые отклонения линейных характеристик $\pm 5\%$.

Шаг внутренней резьбы имплантата 0,4 мм соответствует шагу внешней резьбы заглушки и распространяется на все варианты исполнений медицинского изделия.

Характеристики упаковки (ДхШхГ):

Потребительская упаковка: Имплантат стерильно упакован в пластиковую колбу.

Пластиковая колба (5,5х1,4х1,4 см.), винт-заглушка стерильно упакованы в вакуум-сформированный горячим способом пластиковый блистер с отрывным верхним бумажным листом.

Блистеры (9х4,5х1,8 см.) упаковываются в первичную транспортную упаковку: коробки из картона по 1 шт. в каждую.

Коробка из картона (9.2х4,6х2 см.) упаковывается по 10 шт. в транспортную упаковку.

Транспортная упаковка (24х12,5х12,5 см.).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. ... -убл.	Подп. и дата	КДНДИ.121416.101-00.ИЭ	Лист
						119
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

· ПЕРЕЧЕНЬ

Таблица Г.1

Наименование	Основные характеристики или обозначение документов
Секундомер СОПпр	0 – 30 мин
Штангенциркуль цифро- вой	ГОСТ 166-89. Максимальный размах – 150 мм, шаг 0,01 мм, Предел допускаемой погрешности $\pm 0,02$ мм при измерении до 100 мм и $\pm 0,03$ мм далее
Штангенглубиномер	ГОСТ 166-89, Максимальный размах – 150 мм, шаг 0,01 мм, Предел допускаемой погрешности $\pm 0,02$ мм при измерении до 100 мм и $\pm 0,03$ мм далее
Штангенрейсмас	ГОСТ 164-90. Диапазон измерений: до 250 мм. Предел допускаемой погрешности $\pm 0,01$ мм
Толщиномер индикатор- ный 10-60	ГОСТ 577-68. Предел измерений – 0-10мм, ц-0.01, вылет корпуса – 60мм
Микрометр	ГОСТ 6507-90
Лупа измерительная	ГОСТ 25706-83
Весы статического взве- шивания	ГОСТ Р 53228-2008, предел взвешивания не более 300 г, наименьшая цена деления 0,01 г, класс точности обычный.
Оборудование испыта- тельное специальное	ГОСТ Р ИСО 14801-2012
Камера климатическая	Диапазон значений температуры от минус 50 до плюс 50°C, диапазон значений влажности от 0 до 100 % . Погрешность поддержания температуры не более $\pm 3^\circ\text{C}$, влаж- ности - не более 3%. Полезный объем камеры не менее 1 м ³

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается применение другой контрольно-измерительной аппаратуры, имеющей технические характеристики не хуже рекомендуемой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КДНДИ.121416.101-00.ИЭ

Лист

120

Прошито, пронумеровано 120 листов
и скреплено печатью

Директор
ООО «НС Технологии»

В.С. Дюрягин

