



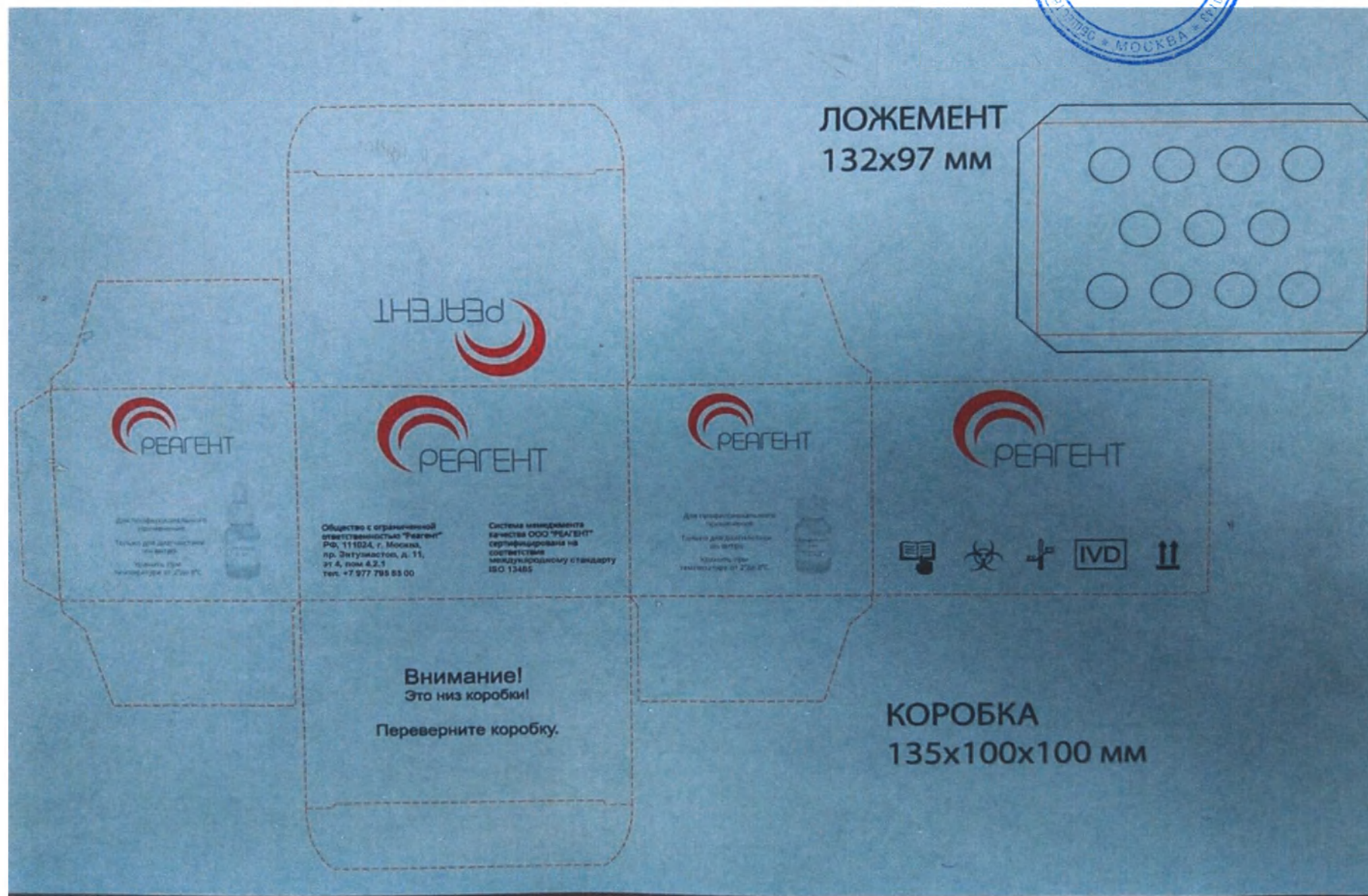

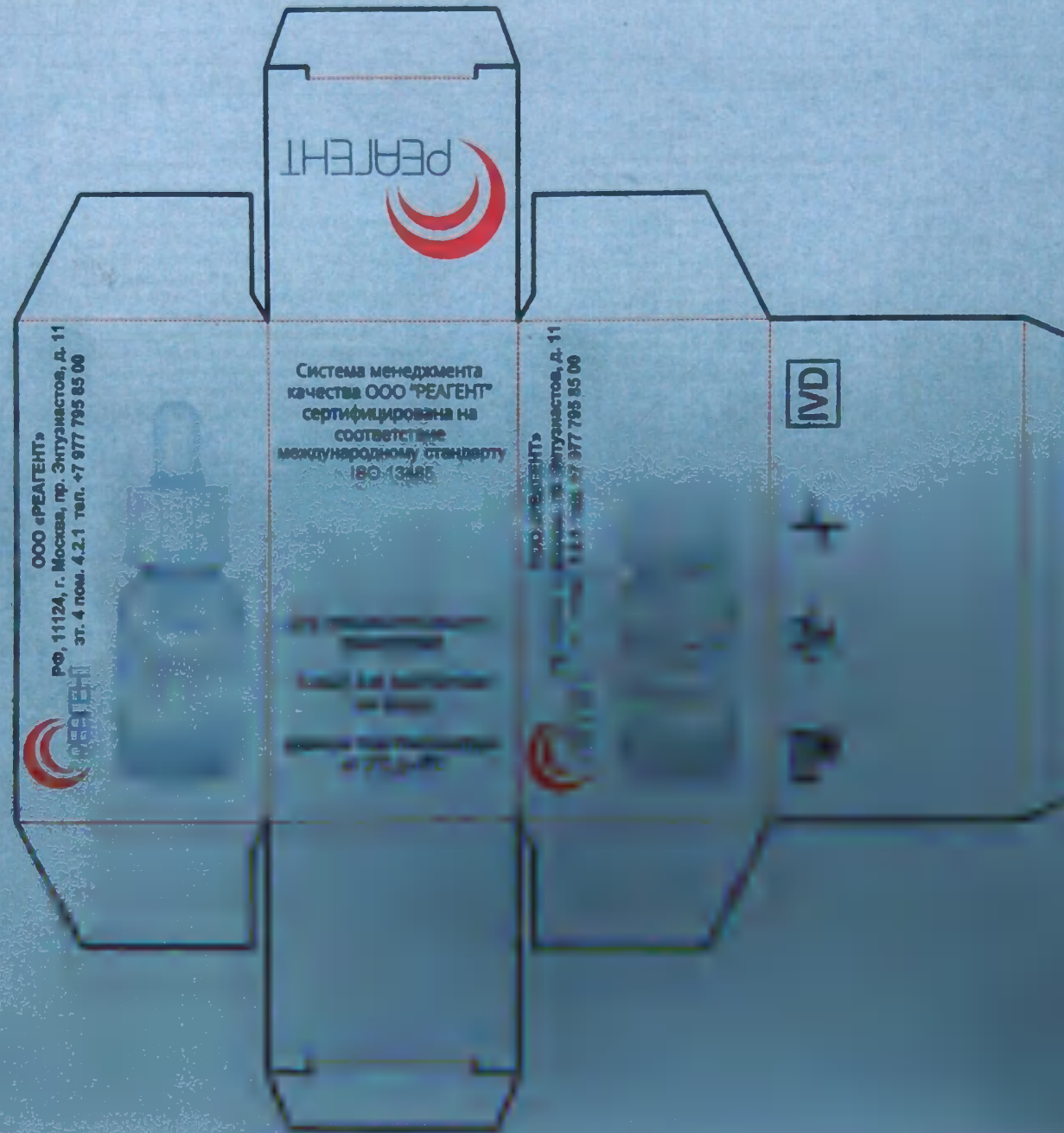

Этикетки для маркировки комплектов сыворотки диагностической сальмонеллезной

[illegible]

[illegible]

Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации»

Комплект № 1



Комплект № 2



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Потенциальные потребители изделий:

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей:

Врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого анализа, сведения о его научной обоснованности:

Сальмонелл — острая зоонозная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся преимущественным поражением ЖКТ, развитием интоксикации и обезвоживания.

Сальмонеллы — граммотрицательные палочки рода *Salmonella* семейства *Enterobacteriaceae*. Выделяют два вида сальмонелл — *S. enterica* и *S. bongori* (не патогенный для человека). Набор реагентов «Сыворотки диагностические колющие и параклюющие для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Bordetella pertussis* и *parapertussis*, выделенных из слизи с задней стенки лоток пациентов.

Показания и противопоказания к применению изделия

Набор реагентов «Сыворотки диагностические колющие и параклюющие для реакции агглютинации»



Набор реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

Комплект №2

Сыворотки диагностические сальмонеллезные жидкие моноспецифические:
0.1 0.2 0.3 10 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.14 24 0.25 0.27 0.28 0.30
0.34 0.35 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50
0.52 0.53 0.54 0.55 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67

0. Vi для реакции агглютинации

Сыворотки диагностические сальмонеллезные жидкие:
(1) колющие (основные типы) (A, K, D, E) для реакции агглютинации
(2) сыворотки диагностические сальмонеллезные жидкие:
(3) колющие (основные типы) для реакции агглютинации

Серия: 030120 Срок годности: 01.2023





Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение
"Центральный научно-исследовательский институт
инфекционных заболеваний и иммунологии"



НА ЗАКАЗЧИКА

Сыворотка предназначена для выявления специфических антител к возбудителю сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных. Применяется для диагностики сальмонеллеза в лабораторных условиях. Сыворотка предназначена для реакции агглютинации в микрокапках и на микропланшетах. Сыворотка предназначена для реакции агглютинации в микрокапках и на микропланшетах. Сыворотка предназначена для реакции агглютинации в микрокапках и на микропланшетах.

- 1. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 2. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 3. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 4. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 5. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 6. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 7. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 8. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 9. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.
- 10. Для диагностики сальмонеллеза в сыворотке крови человека и животных.

ООО "РЕАГЕНТ"
Диагностическая
сыворотка
сальмонеллезная сухая
О-1
для реакции агглютинации
с 0,9% натрия хлорида
годности: 01.2025



Комплект №3

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

О-1

для реакции агглютинации

Серия: **050120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Н:
иден
рода
салы
П:
Д:
п:

в «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для юмощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологического становления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ий не существует.

» применения набора по назначению.

» лабораторной диагностики in vitro.

» бители изделия

» деления лечебно-профилактических учреждений.

» ровень потенциальных пользователей

» раторной диагностики

» алита, сведения о ег

» рая зоонозная инф

» теризующаяся преиму

» метрические пали

» REAGENT

» в диагностическая

» лезная жидкая

» ная 0-1

» и агглютинации

» к применению

» годности: 01.2023

enterica и S. bongori

иные и паракочлевые

реакции агглютинации

выделенных из слизи

показания к применению

сыворотки диагностической

**Комплект №4**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

0-1

для реакции агглютинации

Серия: **070120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведения
исследования
в лаборатории



№ 090120

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная сухая моновалентная О-2 для реакции агглютинации. Срок годности 01.2025.

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025

Срок годности 01.2025



Комплект №5

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-2

для реакции агглютинации

Серия: **090120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 11
эт. 4, пом. 4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании случаев установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Реагенты изделия

Изделия лечебно-профилактических учреждений.

Уровень потенциальных пользователей

Лабораторной диагностики, м.

Аналита, сведения о его на

Острая зоонозная инфекци

Стерилизуемая преимущест

Сматрицательные палочки

ООО "РЕАГЕНТ"

Диагностическая

Сальмонеллезная жидкая

Сыворотка O-2

Для реакции агглютинации

Для применения

Срок годности: 01.2023

S. enterica и S. bongori (н

Живые и параклоушные дл

Для реакции агглютинации (Р

В, выделенных из слизи с за

Показания к применению

Сыворотки диагностическ

**Комплект №6**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-2

для реакции агглютинации

Серия: 110120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"
на территории субъекта Российской Федерации
и/или за ее пределами
предоставляющие услуги по диагностике заболеваний



ИД № 01-01-00000

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные» для реакции агглютинации предназначен для идентификации и типирования клинических случаев заболеваний (РД) на предметном уровне сыворотки. Наборный набор реагентов в целях идентификации, профилактики, лечения, диагностики, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и отравлениях животных и человека, передачи информации.

Идентификация не проводится.

Для идентификации применяется набор реагентов по идентификации:

- сывороточной диагностике в виде:
- пробирки сыворотки
- разделенной пеницы-профессиональных учреждений
- уровня потенциальных пользователей
- используемой диагностики
- анализа данных
- и/или других данных
- для анализа данных
- и/или других данных



ООО "РЕАГЕНТ"

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная

бivalentная O-3
реакции агглютинации

2 мл 0,9% натр

Срок годности



Комплект №7

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-3,10

для реакции агглютинации

Серия: 130120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 11
эт. 4, пом. 4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор ре
идентифика
рода *Salmo*
сальмонелл
Противо
Для одн
Для
Поп
Паб
Про
Вра
Опи
Сал

возбудител
обозначен

Саль

ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая
жидкая
О-3,10
агглютинации
Покр
забо

для применения
срок годности: 01.2023

противо-диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
о качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена. Служат
назначению правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемио
онии источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

существует

нения набора по назначению

ой диагностики in vitro

изделия

ия лечебно-профилактических учреждений

потенциальных пользователей

ной диагностики, медицинский лабо

сведения о его научной обоснован

омозная инфекционная болезнь

ущаяся преимущественным поража

тельные палочки рода *Salmonella*

а и *S. bongori* (не патогенный ди

направленные для реакции агглю

и агглютинации (РА) на предмет

ных из слизи с задней стенки глот

на в применении изделия

диагностическая жидкая

О-3,10



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №8

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-3,10

для реакции агглютинации

Серия: **150120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор ре-
идентифика-
рода Salmor
сальмонелли

Противоп
Для одн
Для г
Поте
Лабо
Проф
Врач
Опис
Саль

возбудите
обезвож
Саль

вида са
диагностическа
сальмонеллезная жидкая
помощи
pertussis

Пока
Набо

годности: 01.2023

сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
ю качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

существует.

нения набора по назначению.

ной диагностики in vitro.

и изделия

ия лечебно-профилактических учреждений.

потенциальных пользователей

ной диагностики, медицинский лаб

сведения о его научной обоснова

монозная инфекционная болезнь

яющаяся преимущественным пора

чительные палочки рода Salmonell

са и S. bongori (не патогенный д

паракоклюшные для реакции аггл

ии агглютинации (РА) на предмет

енных из слизи с задней стенки глот

ания к применению изделия

три диагностическая жидкая

для реакции агглютинации

годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 11
эт. 4, пом. 4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №10

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-4

для реакции агглютинации

Серия: **190120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
на применение набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»


**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью количественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемических заболеваний и установлении источника и фактора передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для одноразового применения набора по назначению.

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, вдали от источников влаги, в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70%, вдали от источников тепла, вдали от источников загрязнения воздуха, вдали от источников шума, вдали от источников вибрации, вдали от источников электромагнитных полей, вдали от источников радиации, вдали от источников загрязнения окружающей среды, вдали от источников загрязнения воздуха, вдали от источников загрязнения воды, вдали от источников загрязнения почвы, вдали от источников загрязнения атмосферы, вдали от источников загрязнения гидросферы, вдали от источников загрязнения литосферы, вдали от источников загрязнения биосферы, вдали от источников загрязнения космосферы, вдали от источников загрязнения антропосферы, вдали от источников загрязнения ноосферы, вдали от источников загрязнения биосферы, вдали от источников загрязнения космосферы, вдали от источников загрязнения антропосферы, вдали от источников загрязнения ноосферы.

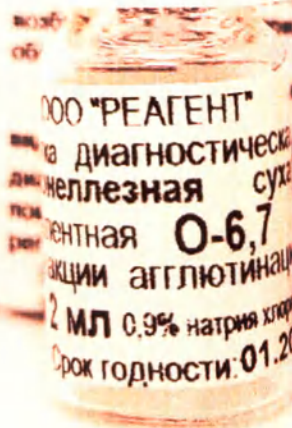**Комплект №13**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-6,7
для реакции агглютинации

Серия: **250120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон
2 мл

Срок годности: **01.2025**



REAGENT

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для использования с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции. Назначений не существует.

Целевое применение набора по назначению:

- в лабораторной диагностике in vitro;
- потребители изделия;
- подразделения лечебно-профилактических учреждений;
- высокий уровень потенциальных пользователей;
- в лабораторной диагностике, медицинском;
- это анализа, сведения о его научной или;
- острая зоонозная инфекционная и;
- характеризующаяся преимущественным;

грамматрицательные палочки рода S

- S. enterica и S. bongori (не патогенные и паразитические для реакции агглютинации (РА) на предметном стекле, выделенных из слизи с задних отделов кишечника к применению изделия «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации»

ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
реакция агглютинации
для применения
срок годности: 01.2023



REAGENT

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №14

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-6,7

для реакции агглютинации

Серия: **270120**

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует

Для однократного применения набора по назначению.

----- лабораторной диагностики in vitro.

----- потребители изделия

----- подразделения лечебно-профилактических учреждений.

----- ий уровень потенциальных пользователей

----- лабораторной диагно

----- т анализа, сведения

----- острая зоонозная

----- характеризующаяся при

ООО "РЕАГЕНТ" граммотрицательные

отка диагностическ
монеллезная су

валентная O-7

реакции агглютина

2 мл 0,9% натрия хл

Срок годности: 01



Комплект №15

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-7

для реакции агглютинации

Серия: **290120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Реагенты «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для использования с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий *Sh* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эспериментальных и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Целью применения набора по назначению.

1. лабораторной диагностики *in vitro*.

2. потребители изделия

3. подразделения лечебно-профилактических учреждений.

4. высокий уровень потенциальных пользователей

5. в лабораторной диагностики, медики

6. для анализа, сведения о его научной

7. острая зоонозная инфекционная

8. характеризующаяся преимущественно

9. грамотрицательные палочки рода

10. *S. enterica* и *S. bongori* (не патогенные и параклоустерии для реакции агглютинации (РА) не *ssis*, выделенных из слизи с задней

11. тиволоказания к применению из

12. «Сыворотки диагностические жидкие

ООО "РЕАГЕНТ"

Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная жидкая

моновалентная O-7

для реакции агглютинации

Готова к применению

Срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №16

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-7

для реакции агглютинации

Серия: **310120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИЗДАНИЕ
на основании приказа Роспотребнадзора
«Содержит диагностическую информацию»
«Содержит диагностическую информацию»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные» для реакции агглютинации предназначен для идентификации с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле сыворотки Сальмонеллы с целью выявления возбудителя болезни Сальмонеллы в случае при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источника и фактора передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не содержит.

Для лабораторного применения набора по назначению.

Для использования в диагностике в ИЛП.

Итого: 1 флакон

Набор: 1 флакон

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний

Применение: для профилактики заболеваний



РЕАГЕНТ

Комплект №17

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная сухая моновалентная

O-8

для реакции агглютинации

Серия: **330120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Н
иде
роде
саль
п
л
-

в «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологического становления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ий не существует.

о применения набора по назначению.

ораторной диагностики in vitro.

ебители изделия

зделения лечебно-профилактических учреждений.

ровень потенциальных пользователей

бораторной диагностики, медицинск

чалита, сведения о его научной об

трая зоонозная инфекционная бс

теризующаяся преимущественным

моторицательные палочки рода Sal

enterica и S. bongori (не патоген

ные и параклошные для реакци

реакции агглютинации (РА) на при

выделенных из слизи с задней ст

показания к применению изде

сыворотки диагностическ

во?
с

ООО "РЕАГЕНТ"

е диагностическая

еллезная жидкая

ентная

О-8

ции агглютинации

ва к применению

рок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №18

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-8

для реакции агглютинации

Серия: **350120**

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Наф
идент
рода
сальм
Прс
Дли
н

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
мощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
ановления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

не существует.

применения набора по назначению.

аторной диагностики in vitro.

ители изделия

еления печечно-профилактических учреждений.

звень потенциальных пользователей

аторной диагностики, медицинский лабо

пита, сведения о его научной обоснован

ая зоонозная инфекционная болезнь

ризывающаяся преимущественным поражи

отрицательные палочки рода Salmonella

anterica и S. bongori (не патогенный дл

ые и параклоушные для реакции агглю

вакции агглютинации (РА) на предметн

ыделенных из слизи с задней стенки глот

показания к применению изделия

сыворотки диагностические коклюшечные и

возб
обе

ООО "РЕАГЕНТ"
вид: диагностическая
диагностическая
пов: сальмонеллезная жидкая
рег: антигенная O-9
для реакции агглютинации
для применения
срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №20

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-9

для реакции агглютинации

Серия: **390120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»


**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению:

лабораторной диагностики *in vitro*,
отребители изделия
разделения лечебно-профилактических учреждений
и уровень потенциальных пользователей
лабораторной
то анализа, свед
острая зоона
характеризующаяся

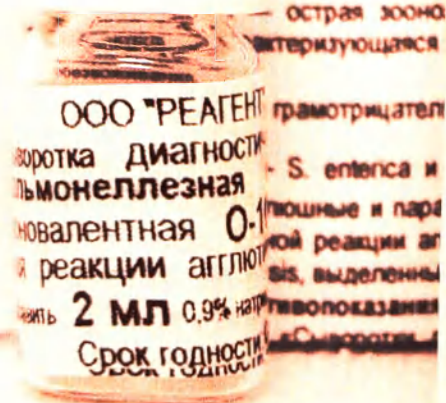**Комплект №21**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-10

для реакции агглютинации

Серия: **410120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

иде
рог
саг

ов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для
помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ний не существует.

го применения набора по назначению.

бораторной диагностики in vitro.

ребители изделия

азделения лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

абораторной диагностики, медицинский

аналита, сведения о его научной обос

лострая зоонозная инфекционная бол

теризующаяся преимущественным

намотрицательные палочки рода *Salp*

S. enterica и *S. bongori* (не патоген

шные и параклоушные для реакции

й реакции агглютинации (РА) на пред

ь, выделенных из слизи с задней стенки

вопоказания к применению изделия

Сыворотки диагностические коплиш

ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
О-10
для агглютинации
для применения
срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №22

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-10

для реакции агглютинации

Серия: **430120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора для диагностики
«Сыворотка диагностическая сальмонеллезная
для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью количественной реакции агглютинации (РА) из производимых штаммов сальмонелл рода *Salmonella* с целью определения принадлежности к штамму *Salmonella* в целях при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источника и фактора передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для лабораторного применения набора по назначению:

- лабораторной диагностики и для
- требования к набору
- гражданам научно-профессиональных учреждений
- и уровнем потенциальных пользователей
- лабораторной диагностики

1. Анкета, сведения
о стране происхождения
и сертификация по

трансграничным



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая

сальмонеллезная сухая

типная O-11

для реакции агглютинации

МЛ 0.9% натрия хлорида

срок годности: 01.2025

Комплект №23

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-11

для реакции агглютинации

Серия: **450120**

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентифи-
кация
рода *Salmonella*

Против
Для
Дл
П
П
П
В
О
С

возбуди
обезв

Са

вида

диагн

помощи

реп

По

за

ж

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации предназначена для
для качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
но назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологического
влияния источников и факторов передачи возбудителя инфекции

существует

менения набора по назначению

орной диагностики in vitro

или изделия

влияния лечебно-профилактических учреждений

инь потенциальных пользователей

горной диагностики, медицинский п

та, сведения о его научной обоснов

зоонозная инфекционная болез

ущающаяся преимущественным пор

ициательные палочки рода *Salmonella*

и *S. bongori* (не патогенный

и параклоушные для реакции аг

гглютинации (РА) на предм

впавших из слизи с задней стенки п

азвания к применению изделия

реакции агглютинации

для к применению

ж годности: 01.2023

**Комплект №24**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-11

для реакции агглютинации

Серия: **470120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ

к применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью концевых реакций агглютинации (РА) на предметном стекле эритроцитарного фактора Сальмонеллы с целью назначения правильного лечения больного, а также при исследовании эритроцитарного агглютинации и установлении источника и фактора передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

После вскрытия набора:
— лабораторной диагностики in vitro;
— потребителям в целях
— подразделения лечебно-профилактических учреждений
— и уровень потенциальных пользователей
— лабораторной диаг-
— то анализа, сведения
— острая возможная
— материализуется при

ООО "РЕАГЕНТ"

отка диагностическая
монеллезная су-

валентная О-12

реакции агглютинации

2 мл 0,9% натрия

Срок годности: 01.2025



Комплект №25

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

О-12
для реакции агглютинации

Серия: 490120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для выявления качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек заболевания источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Назначение набора по назначению
для лабораторной диагностики in vitro,
или изделия
для использования в лечебно-профилактических учреждениях
для потенциальных пользователей
для лабораторной диагностики, медицинский
для получения сведений о его научной обоснованности
для зоонозная инфекционная болезнь
являющаяся преимущественным патогеном

Набор реагентов
для идентификации
вида Salm
сальмонел
Против
Для од
Дл
По
Па
Пр
Вр
Оп
Сальмонел
возбудитель
обезвре

Сальмонеллезная жидкая

диагностическая
сыворотка
помощная
pertussis

По применению

Срок годности: 01.2023

сальмонеллезные палочки рода Salm

visa и S. bongori (не патогенны)
и паракоррелирующие для реакции
агглютинации (РА) на предметном стекле
из слизи с задней стенки
назначения к применению изделия
для лабораторной диагностики

**Комплект №26**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-12

для реакции агглютинации

Серия: **510120**Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики *in vitro*.

убители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

ораторной диагностики, меди

алита, сведения о его научно

...рая зоонозная инфекционн:

оизующаяся преимущественно

... ..

отрицательные палочки род

ВОЗР.
ОБ/

00 "REAGENT"

диагностическая
желудочная сухая
печеньная O-13
агглютинации

МЛ 0,9% натрия хлорида
рок годности: 01.202



000 "REAGENT"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №27

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-13

для реакции агглютинации

Серия: 530120

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор р
идентифи
рода *Salmonella*
сальмонел

Против

Для од

Дл

По

Ла

Пр

Вр

Оп

Сы

возбуд
обезв

Салмо "РЕАГЕНТ"

вида / диагностическая

жидкая

помощная

pertussis агглютинация

По

к применению

годности: 01.2023

сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий
назначения правильного лечения больного, а также при расследовании источника
заболевания и факторов передачи возбудителя инфекции.

существует

назначение набора по назначению

орной диагностики in vitro

или изделия

ния лечебно-профилактических учреждений

на потенциальных пользователей

орной диагностики, медицине

та, сведения о его научной о

зоонозная инфекционная (

ощающаяся преимущественным

ициательные палочки рода *S.*и *S. bongori* (не патог

и паразитирующие для реак

ции агглютинации (РА) на п

влённых из смеси с эдальной ст

изделия к применению изде

ициательные палочки

ициательные палочки

ициательные палочки

**Комплект №28**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-13

для реакции агглютинации

Серия: **550120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



REAGENT

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению

лабораторной диагностики in vitro.

ители изделия

вления лечебно-профилактических учреждений.

вень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, медици

пита, сведения о его научной с

ая зоонозная инфекционная

излучающаяся преимущественны

трицательные палочки рода

возбу
обе:

ООО "РЕАГЕНТ"

вид: диагностическая
диагностическая сальмонеллезная сухая
пом: сухая
реп: сухая
пции агглютинации
мл 0,9% натрия хлорида
срок годности: 01.2025



REAGENT

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №29

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-14

для реакции агглютинации

Серия: **570120**Срок годности: **01.2025**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентифи
рода *Sal*
сальмоне

Проти

Для о

Д

П

Л

П

В

С

С

возбуж

обез

СОО "РЕАГЕНТ"

а диагностическая

селлезная жидкая

ентная O-14

ции агглютинации

П

к применению

Срок годности: 01.2023

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
щью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
лю назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
ювления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.
е существует.

именения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.

тели изделия

ления лечебно-профилактических учреждений.

еень потенциальных пользователей

торной диагностики, медицинс

ита, сведения о его научной об

ея зоонозная инфекционная б

зующаяся преимущественным

трицательные палочки рода *Sal*

terica и *S. bongori* (не патоген

е и параклошные для реак

акции агглютинации (РА) на п

деленных из слизи с задней сте

казания к применению изде

противо-диагностические ко

противо-диагностические ко

противо-диагностические ко

противо-диагностические ко

противо-диагностические ко



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №30

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-14

для реакции агглютинации

Серия: **590120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики *in vitro*.

Потребительские изделия

Лаборатория лечебно-профилактических учреждений.

Продукция для потенциальных пользователей

Врач клинической диагностики.

Описание сведений о его на

Сальмонеллезная инфекция

возбудитель, возбудитель, возбудитель

обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание

Сальмонеллезная инфекция

ООО "РЕАГЕНТ"

вида сальмонеллезной инфекции и *S. bongori* (группа)

диагностическая сыворотка параклоустерофильная

помощью качественной реакции агглютинации (РА)

pertussis, pertussis, pertussis

Показатель агглютинации

Набор реагентов

мл 0,9% натрия хлорида

срок годности: 01.2025



Комплект №31

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-15
для реакции агглютинации

Серия: **610120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентиф
рода Sa
сальмон

Проти

Для с

Г

Г

Г

Г

Е

Г

С

возбуг

обез

ООО "РЕАГЕНТ"

вида диагностическая
жидкая
поместная
реакции агглютинации

на применение

срок годности: 01.2023

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
щью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
ную назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
явления источников и факторов передачи возбудителя инфекции

е существует

именения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.

тели изделия

ления лечебно-профилактических учреждений

юнь потенциальных пользователей

второй диагностики, медици

ита, сведения о его научной

рая зоонозная инфекционная

зующаяся преимущественны

рицательные палочки рода

terica и S. bongori (не пат

е и паразитические для реа

акции агглютинации (РА) на

деленных из слизи с задней с

казания к применению изд

рооты диагностические кок

**Комплект №32**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-15

для реакции агглютинации

Серия: **630120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

Гели изделия

лечения лечебно-профилактических учреждений.

Потенциальных пользователей

Второй диагностики, медицински

Опыт, сведения о его научной обос

С. зоонозная инфекционная бо

возбудитель, являющаяся преимущественным

обезв

Са. ициательные палочки рода *Salmonella*

ООО "РЕАГЕНТ"

вида на диагностическая *Salmonella* и *S. bongori* (не патоген

диагностическая сухая и параклюшковые для реакции

помощи агглютинации (РА) на пре

пертус. еленной из слизи с задней стени

По. азания к применению изделия

На. 2 мл 0,9% натрия хлорида

Срок годности: 01.2025



Комплект №33

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-16

для реакции агглютинации

Серия: **650120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набо
идентиф
рода S:
сальмон
Прот
Для

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
оценок качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий
для назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
новления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.
не существует.

именения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.

тели изделия

ления лечебно-профилактических учреждений.

вены потенциальных пользователей

торной диагностики, ме

ита, сведения о его науч

рая зоонозная инфекция

зующаяся преимуществе

возбу
обе:

ООО "РЕАГЕНТ"

вид: диагностическая
сыворотка жидкая
пометная O-15
реакции агглютинации

для применения

срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №34

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-16

для реакции агглютинации

Серия: **670120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эсшерихии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики in vitro.

Пл. или изделия

Па. зения лечебно-профилактических учреждений.

Пр. нья потенциальных пользователей

Вр. орной диагностики, медицинский

Ог. а, сведения о его научной обосн

Са. зоонозная инфекционная боле

возбудит. ющаяся преимущественным п

обезво. иательные палочки рода *Salmonella*

Саг. иательные палочки рода *Salmonella*

ООО "РЕАГЕНТ" и *S. bongori* (не патогенны

вида. ита диагностическая сыворотка

диагно. онеллезная сыворотка

помощ. иентная О-17

pertuss. реакции агглютинации

Пок. 2 мл 0.9% натрия хлорида

Наб. 2 мл 0.9% натрия хлорида

Срок годности: 01.2025



РЕАГЕНТ

Комплект №35

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-17

для реакции агглютинации

Серия: **690120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

На
идент
рода
сальм
Пр
Дл
-

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
имостью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий
целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
гановления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

и не существует.
применения набора по назначению.

ракторной диагностики in vitro.
бители изделия
деления лечебно-профилактических учреждений
ювень потенциальных пользователей
ракторной диагностики, и
алита, сведения о его на
рая зоонозная инфекц
онизующаяся преимущест

возб
об

ООО "РЕАГЕНТ"

в» диагностическая
длительная жидкая
полная **O-17**
реакции агглютинации
на к применению
ж годности: **01.2023**

отрицательные палочки
enterica и S. bongori (и
ные и параклошущие д
реакции агглютинации (F
выделенных из слизи с за
показания к применению
сыворотки диагностическ



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №36
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная
O-17
для реакции агглютинации
Серия: **710120**

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон
2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемий сальмонеллеза и установления источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению:

- в лабораторной диагностике *in vitro*
- взвешиватели изделия
- здания лечебно-профилактических учреждений
- уровень потенциальных пользователей
- бораторной диагностики, медицинских
- напита, сведения о его научной об
- утрая зоонозная инфекционная б
- теризующаяся преимущественным



ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая

сальная сухая

твая O-18

и агглютинации

0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

амитрицательные палочки рода *Sal*

enterica и *S. bongori* (не патог

иные и параккоклюшные для реак

реакции агглютинации (РА) на п

выделенных из слизи с задней ст

показания к применению издел

ыворотки диагностическое



РЕАГЕНТ

Комплект №37

Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная сухая

моновалентная

O-18

для реакции агглютинации

Серия: 730120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



РЕАГЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации предназначена для
общей качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий
целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании источника
возникновения источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

именения набора по назначению.

второй диагностики in vitro.

тели изделия

ления лечебно-профилактических учреждений.

вены потенциальных пользователей

второй диагностики, мед

чита, сведения о его науч

второй зоонозная инфекция

зующаяся преимущество

тридцатые палочки р

Набо
идентиф
рода S
сальмон
Прот
Для:

возбу
обез

ООО "РЕАГЕНТ"

виде диагностическая
железная жидкая
момента **O-18**
реакции агглютинации

ва к применению
рок годности: 01.2023

merica и S. bongori (не
и параволлютные для
реакции агглютинации (РА)
деленных из слизи с задн
разная к применению
реакции агглютинации.



РЕАГЕНТ

Комплект №38

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-18

для реакции агглютинации

Серия: **750120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических случаев сальмонеллеза и установлении источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

1. Назначение набора по назначению
2. Для лабораторной диагностики in vitro
3. Вли издлия
4. Для выявления лечебно-профилактических учреждений
5. Для выявления потенциала
6. Для лабораторной диаг
7. Для сбора, а, сведени
8. Для Сальмонеллы, которая зоонозная
возбудитель, вызывающая пр
обезв
Sal

«РЕАГЕНТ»
диагностическая
сухая
O-19
агглютинации
0,9% натрия хлорида
годности: 01.2025



РЕАГЕНТ

Комплект №39

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-19

для реакции агглютинации

Серия: 770120

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентиф
рода Sa
сальмон

Прот
Для с

Д
Г
Г
Г
Е
С

возбу
обези

С
"РЕАГЕНТ"

вида диагностическая
жидкая
поместная
реакция агглютинации

Назначение

годности: 01.2023

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
целью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
пью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических
овления источников и факторов передачи возбудителя инфекции
е существует.

именения набора по назначению

торной диагностики in vitro.

тели изделия

ения лечебно-профилактических учреждений.

внь потенциальных пользователей

торной диагностики, медицинск

та, сведения о его научной обо

зоонозная инфекционная бо

зующаяся преимущественным

рицательные палочки рода Sali

terica и S. bongori (не патоген

е и параклоушные для реакци

акции агглютинации (РА) на при

деленных из слизи с задней стен

казания к применению изделия

реакции агглютинации

**Комплект №40**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-19

для реакции агглютинации

Серия: **790120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



РЕАГЕНТ
на ферментативный метод диагностики
сальмонеллезной инфекции
с использованием для реакции агглютинации



ЦД. 30-04-01-000

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации и выявления количественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле с использованием Бактерий рода *Salmonella* с целью установления принадлежности бактерий к роду при исследовании эпитомы сальмонелл в установлении инфекции и фактора передачи возбудителя инфекции.

Применяющийся по назначению:

— для применения набора по назначению
— для лабораторной диагностики и
— для потребителей изделий
и подразделениям лечебно-профилактических учреждений
— высокий уровень потенциальной
— для лабораторной ди-
— своего анализа, сведен
— плес — острая эрозия
характеризующаяся

РЕАГЕНТ
диагностическая
сальная сухая
для О-20
агглютинации
0,3% натрия хлорида
содержит: 01.2025

— граммотрицательный
— *S. enterica* и *S.*
кокцидные и паракоч-
венной реакции агглю-
tinationis, выделенных из
культуры и п
«Сыворотки для



Комплект №41

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-20

для реакции агглютинации

Серия: **810120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



REAGENT

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набо
идентиф
рода S
сальмон
Прот
Для

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
оценки качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле активных бактерий
илю назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических
источников и факторов передачи возбудителя инфекции
не существует.

наименования набора по назначению.

вторичной диагностики in vitro.

тели изделия

ления лечебно-профилактических учреждений

и для потенциальных пользователей

вторичной диагностики, меди

и, сведения о его научн

ной зоонозной инфекцион

яющаяся преимущественно

возбу
обез

ООО "РЕАГЕНТ"

вид диагностическая
жидкая
пом
реп
агглютинации

на к применению

годности: 01.2023

трицательные палочки ро

terica и S. bongori (не п

не и параконъюнктивные для ;

акции агглютинации (РА)

изготовленных из слизи с задне

назначения к применению и

протект, диагностический



REAGENT

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №42

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-20

для реакции агглютинации

Серия: **830120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

- лабораторной диагностики in vitro.
- потребители изделия
- подразделения лечебно-профилактических учреждений.
- широкий уровень потенциальных пользователей
- лабораторной диагностики, медицинский персонал
- тоналита, сведения о его научной обоснованности
- острая зоонозная инфекционная болезнь
- характеризующаяся преимущественным

РЕАГЕНТ

диагностическая

сухая

0-21

агглютинации

натрия хлорида

годности: 01.2025

грамотрицательные палочки рода *Salmonella*

- *S. enterica* и *S. bongori* (не патогенные)

плотные и параклоустные для реакции

агглютинации (РА) на предметном стекле

ис, выделенных из слизи с задней стенки

противопоказания к применению изделия

«Сыворотки диагностические коклюш

**Комплект №43**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

0-21

для реакции агглютинации

Серия: **850120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

На
идент
рода
саль
Пг
Д
-

в «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании истинных становления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ий не существует.

о применения набора по назначению.

--- лабораторной диагностики in vitro.

вбители изделия

зделения лечебно-профилактических учреждений.


ровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, меди

чалита, сведения о его научн

страя зоонозная инфекция

ризывающаяся преимуществен

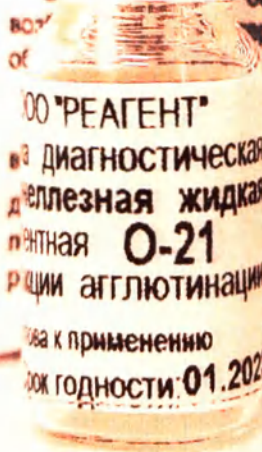

матрицательные палочки ро

enterica и S. bongori (не п

ные и параконъюнктивные для р

реакции агглютинации (РА)

выделенных из слизи с задне

показания к применению и

сыворотки диагностические



Комплект №44
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-21
для реакции агглютинации

Серия: **870120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению

Лабораторной диагностики in vitro.
Исследователи и производители изделий.
Заведения лечебно-профилактических учреждений.
Специальный персонал, ответственный за уровень потенциальных пользователей.
Лабораторной диагностики, медицинские работники, сведения о его научной деятельности.
Сведения о его научной деятельности, связанная зоонозная инфекционная патология, возбудитель которой является преимущественно

возб.
об

ООО "РЕАГЕНТ"

В диагностическая
дизентерическая сухая
по ре-
наая **O-22**
и агглютинации

0,9% натрия хлорида
годности: **01.2025**

шпательные палочки род
enterica и *S. bongori* (не п
ные и параклоушные для р
реакции агглютинации (РА) i
выделенных из слизи с задне
показания к применению и:
сыворотки диагностические и



Комплект №45
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-22
для реакции агглютинации
Серия: **890120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон
2 мл

Срок годности: **01.2025**



REAGENT

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

иде
роз
сап

ов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ний не существует.

го применения набора по назначению.

бораторной диагностики in vitro.

ребители изделия

азделения лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

бораторной диагностики, ме

аналита, сведения о его на

страя зоонозная инфекци

теризующаяся преимущест

намотрицательные палочки

S. enterica и S. bongori (и

ишные и паражолюющие дл

а реакции агглютинации (Р

а, выделенных из слизи с за

показания к применению

Сыворотки диагностическ

ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
сыворотка O-22
для реакции агглютинации
для применения
срок годности: 01.2023

**Комплект №46**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-22

для реакции агглютинации

Серия: 910120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон**2 мл**

Срок годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»




НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании случаев сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению:

лабораторной диагностики *in vitro*,
репитери издательства
отделения лечебно-профилактических учреждений,
уровень потенциальных пользователей
лабораторной диагностики,
аналита, сведения о его на-
чальная зоонозная инфекция
характеризующаяся преимущественно

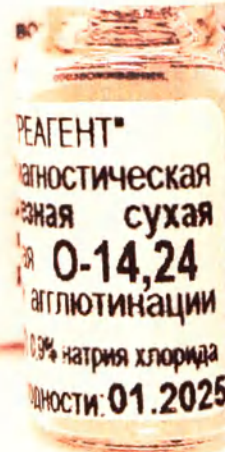

лабораторные палочки
S. enterica и *S. bongori* (и
иные и параклоустные д
и реакции агглютинации (F
и, выделенных из слизи с за
показания к применению
Сыворотки диагностическ



Комплект №47
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная
O-14,24
для реакции агглютинации

Серия: **930120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон
2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

На
идент
рода
сальм
Пр
Дг
-

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
омощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
тановления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.
ий не существует.

применения набора по назначению.

ораторной диагностики in vitro.

убители изделия

деления печечно-профилактических учреждений.

ровень потенциальных пользователей

ораторной диагностики, меди

алита, сведения о его научнс

острая зоонозная инфекционн

ризывающая преимущественн

отрицательные палочки род

enterica и S. bongori (не п

ные и параклошные для р

реакции агглютинации (РА) +

выделенных из слизи с задне

показания к применению из

сыворотки диагностические ж



Комплект №48

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-14,24

для реакции агглютинации

Серия: 950120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов


**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2023


воз
об
ООО "РЕАГЕНТ"
ви
диагностическая
жидкая
по
ре
ттая
агглютинации
ка к применению
годности: 01.2023

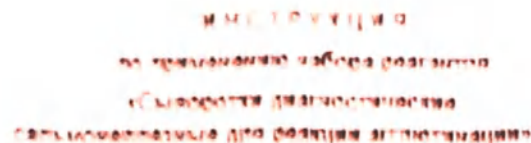

Найбільш реактивна є бактерія *Salmonella enteritidis* для реакції агглютинації, продиagnostична при ідентифікації з допомогою констатувачів реакції агглютинації (РА) на предметному стеклі з антигеном бактерій роду *Salmonella* з цим же назначенням продиagnostичного починення більшою, а також при розшифровуванні агглютинації *Salmonella* з використанням істинних та фальшивих породинок агглютинації.

Для однократного применения шаблон по максимуму

лабораторный диагностику и info
требители изделия
Целевые лечебно-профилактические учреждения
и уровень потенциальных пользователей
лабораторной диагностики, меди
анализа, сведения о его частоте
острая зоонозная инфекционн
характеризующаяся преимущественно

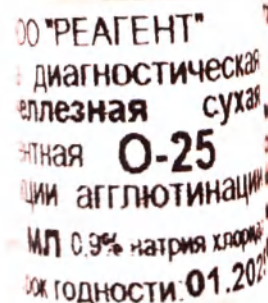

Комплект №49
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная
O-25
для реакции агглютинации
Серия: **970120** Срок

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

**Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон
2 мл

Срок годности: 01.2025



Набор реагентов
идентификации с
рода *Salmonella* с
сальмонеллез и у
Противопоказан
Для одноразового
Для клинических
Потенциал
Лаборатория
Профессионал
Врачи клиники
Описание
Сальмонеллы
возбудителя, и
обезвреживание

Сальмонеллы
диагностическая
жидкая
O-25
агглютинации
применению
годности: 01.2023

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
стандартной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенной факторий
менее правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических
статистики и факторов передачи возбудителя инфекции
набор по назначению.

тестирование in vitro
на
внутри-профилактических учреждений
владельцев пользователей
информации, медицинский
научно-исследовательский
инфекционная больница
преимущественным

на палочки рода *Salmonella*
 bongori (не патоген)
используемые для реакции
агглютинации (РА) на предметном
стекле с заданной силой
применения изданных
инструкций, допуск



Комплект №50
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная
O-25
для реакции агглютинации
Серия: **990120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"

1 флакон
2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле этикетки Сыворотки рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установлении источника и фактора передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению:

- ✓ лабораторной диагностики in vitro;
- ✓ потребности изданий;
- ✓ подразделения лечебно-профилактических учреждений;
- ✓ уровень потенциальных пользователей;
- ✓ лабораторной диагно-
- ✓ то анамнест, сведения с
- ✓ острая возмозная и
- ✓ материализуемая при

ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая
сухая

О-27

агглютинации

0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

прямотрицательные и
- *S. enterica* и *S. boy*
плодные и параклод
ной реакции агглютин
ции, выделенных из сл
указаний к при
«Сыворотка диагностическая



Комплект №51

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-27

для реакции агглютинации

Серия: 1010120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор ре
идентифика
рода *Salmo*
сальмонелл

Противог
Для одн
Для
Пот
Паб
Про
Вра
Опи
Саль
возбудит
обезвож

Саль **РЕАГЕНТ**

вида с
диагнос
помощ
pertuss
Показ
Наб
к применению
Срок годности **01.2023**

ротки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для
ю качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
жения источников и факторов передачи возбудителя инфекции
существует.

нения набора по назначению.

ной диагностики in vitro.

и изделия

ия лечебно-профилактических учреждений.

потенциальных пользователей

ной диагностики, медицинский л

сведения о его научной обосно

зоонозная инфекционная болез

ющаяся преимущественным по

цательные палочки рода *Salmon*

и *S. bongori* (не патогенный

паракокклюзные для реакции аг

ии агглютинации (РА) на предм

енных из слизи с задней стенки г

ания к применению изделия

диagnostические коклюш

**Комплект №52**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-27

для реакции агглютинации

Серия: **1030120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эсшерихий сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Потребители изделия

Подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Потенциальный уровень потенциальных пользователей

Лабораторной диагностики

Целевого анализа, сведения о его

Сальмонеллез — острая зоонозная инфекция

Характеризующаяся преимущественно

Палочки — грамотрицательные палочки

Сальмонелла — *S. enterica* и *S. bongori*

Коклюш и паракклюш

Естественной реакции агглютинации

Paratuberculosis, выделенных из слизи с

и противопоказания к применению

Реагентов «Сыворотки диагностические

ООО "РЕАГЕНТ"

Диагностическая

Сухая

Сальмонеллезная

О-28

Для реакции агглютинации

2 мл 0,9% натрия хлорида

Срок годности: 01.2025



Комплект №53

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-28

для реакции агглютинации

Серия: **1050120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентифи-
рода *Sal-*
сальмоне

Проти-
Для *o*,
Дл-
Пс
Пс
Пс
Вр
От
С
возбуди-
обезе

С
ООО "РЕАГЕНТ"
вида
диагн-
помо-
pertu-
пн-
Н
к применению
годности: 01.2023

ыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
щью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
тью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании истинных
рвления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

в существует.

именения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.

ели изделия

ения лечебно-профилактических учреждений.

инь потенциальных пользователей

торной диагностики.

та, сведения о его н.

зоонозная инфек

тующаяся преимуществ

рицательные палочк

onica и *S. bongori* (

и параклошные,

иции агглютинации

еленных из слизи с:

казания к применен

ротки диагностическ

**Комплект №54**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-28

для реакции агглютинации

Серия: **1070120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

Потребители и изделия.

Лаб. для лечебно-профилактических учреждений.

Прок. для потенциальных пользователей.

Врач. для лабораторной диагностики, медицины.

Опис. сведения о его научной об.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

обезвожи. сухая.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

Саль. возбудитель сальмонеллезной инфекции.

**Комплект №55**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-30

для реакции агглютинации

Серия: **1090120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

для
пол-
стат

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при исследовании эпитаксиса, установлении источника и фактора передачи возбудителя инфекции, который не существует.

по применению набора по назначению:

- лабораторной диагностики in vitro
- гребители издателя
- разделения лечебно-профилактических учреждений
- и уровень потенциальных пользователей
- лабораторной диагностики, мед
- аналита, сведения о его науч
- острая зоонозная инфекция
- характеризующаяся преимуществ

ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
для реакции агглютинации
по применению
годности 01.2023

растворительные палочки р
S. enterica и S. bongori (не
ошные и параклоушные для
и реакции агглютинации (РА)
в, выделенных из слизи с зад
показания к применению
Сыворотки диагностические

**Комплект №56**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-30
для реакции агглютинации
Серия: **1110120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Забиты изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

ровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, медицинский

калита, сведения о его научной обосн

рая зоонозная инфекционная боле

ризующаяся преимущественным пк

мотрицательные палочки рода Salmo

enterica и *S. bongori* (не патогенны

ные и параклоушные для реакции а

реакции агглютинации (РА) на преда

выделенных из слизи с задней стенки

показания к применению изделия

сыворотки диагностические коклюшн



ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая

сальная сухая

О-34

агглютинации

натрия хлорид

годности: 01.2025



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №57

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

О-34

для реакции агглютинации

Серия: 1130120

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентифи-
кация рода *Sal*
сальмонел-
лезных

Против
Для
Диагности-
ка
Печень
Печень
Взрослые
Острые
Сальмонел-
лезная
возбудитель
обезопасе-
ния

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для
лишь качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
пью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
явления источника и факторов передачи возбудителя инфекции

е существует

именения набора по назначению

торной диагностики in vitro

тели изделия

ления печеночно-профилактических учреждений

ень потенциальных пользователей

торной диагностики, меди-

ста, сведения о его научн

зоонозная инфекционн

тующаяся преимущественно

трицательные палочки ро

ООО "РЕАГЕНТ"

вида диагностическая
жидкая
О-34
агглютинации

применению

годности 01.2023

typhimurica и *S. bongori* (не
е и параклюшные для
акции агглютинации (РА)
деленных из слизи с задн
казания к применению

**Комплект №58**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

О-34

для реакции агглютинации

Серия: **1150120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики *in vitro*.

Исследователи изделия

изделения лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, медицинский персонал.

Сведения о его научной обоснованности.

Тяжелая зоонозная инфекционная болезнь.

Характеризующаяся преимущественным поражением кишечника.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.

Палочки рода *Salmonella*.



ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №59

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-35

для реакции агглютинации

Серия: **1170120**

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**

ООО «РЕАГЕНТ»

Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная сухая

моновалентная

для реакции агглютинации

O-35

МЛ 0,9% натрия хлорида

срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Идентификация
рода
сальмонелл
Применение
Диагностика

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек становления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Бители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

Ховень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, в

алита, сведения о его на

ражая зоонозная инфекци

ризующаяся преимущес

моторицательные палочки

возб
об

ООО "РЕАГЕНТ"

ва диагностическая
дизентерическая жидкая
реакция агглютинации
О-35

применению
годности 01.2023

enterica и S. bongori (и
иные и параклошные д
реакции агглютинации (I
выделенных из слизи с э
показания к примени
сыворотки диагностичес



Комплект №60

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

О-35

для реакции агглютинации

Серия: **1190120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследованиях эсшерихий сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению:

- лабораторной диагностики *in vitro*
- ебители изделия
- деления лечебно-профилактических учреждений
- ровень потенциальных пользователей
- бораторной диагностики, медицинский па-
- чалита, сведения о его научной обоснова-
- трая зоонозная инфекционная болезнь
- еризирующаяся преимущественным пора-

воз-

О "РЕАГЕНТ"

в диагностическая
д лезная сухая
п тная О-38
рн агглютинации

АП 0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

микроцистальные палочки рода *Salmonel*

entica и *S. bongori* (не патогенный,
ные и параклоушные для реакции агг
реакции агглютинации (РА) на предмет
выделенных из слизи с задней стенки глс
показания к применению изделия

сыворотки диагностические агглютини-



Комплект №61

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

О-38

для реакции агглютинации

Серия: 1210120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

«Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначена для быстрой постановки реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенной (бактерий) целью назначения: первичного лечения больных, а также при расследовании эпидемических источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

- 1. не рекомендуется применять набор по назначению:
- 2. вторичной диагностики и эпид.
- 3. целью изданий
- 4. в целях профилактики учреждений
- 5. в целях профилактики пользования
- 6. сывороткой для диагностики
- 7. при проведении с этой
- 8. в лабораториях инфекционных
- 9. учреждений
- 10. в лабораториях



ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №62

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная жидкая моновалентная

O-38

для реакции агглютинации

Серия: 1230120

Набор реагентов

«Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации»

1 флакон


2 мл

Срок годности: 01.2023

ООО «РЕАГЕНТ»

«Сыворотка диагностическая сальмонеллезная жидкая моновалентная O-38 для реакции агглютинации»

Срок годности: 01.2023

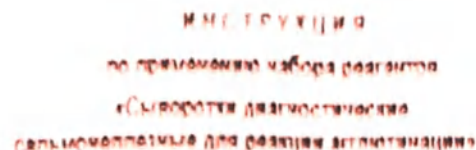

HAZARDOUS

Набор реагентов «Смарт-диагностика» (Смарт-диагностика) для реакции агглютинации предназначен для идентификации с помощью коаггуляционной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью установления правильного лечения больного, а также при распространении эсшерихий *Salmonella* и установлении источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует

Для однократного применения набора по изданию

Дисциплина: «...»

Потенциалын

Лабораторны

Профессиона

Врач-клиниче

Описание цел:

7. **Задача 7**

возбудителя кар — инфекционная болезнь
обезвоживания преимущественным по

Сальмонеллы

"PEACHT"

*) палочки рода *Salmon*

вида сальмонеллы **диагностическая bongori** (не патогенный)

диагностические **плезная** **сухая** **пошныне** для реакции аг

помощью качественной **O-39** иннации (РА) на предм

Показатели в л. агглютинации слизи с задней стенки г.

Показания и п... аплютиации
Избор... изменение изделия

01-994 натрия хлорид

годности 01.2025



000 "REAGENT"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №63

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

0-39

для реакции агглютинации

Серия: **1250120**

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотку диагностическую сальмонеллезную для реакции агглютинации предназначены для выявления реакции агглютинации (РА) на предметном стекле с антигенами бактерий рода *Salmonella* (сальмонеллы) в целях при исследовании эпитомы. Реакцию используют в качестве реакции агглютинации инфракрасной.

в лабораториях:

иммунологического набора по назначению

формы диагностики и учета

для изучения

внешне-печеночных профилактических учреждений

на потенциальных пользователях

формы диагностики

та, сведения

заполняется

заполняется при

реакции

реакции

Набор
идентичен
реакции
сальмонеллы
Третья
Третья
Третья

реакции
сальмонеллы

«РЕАГЕНТ»
диагностическая
жидкая
О-39
агглютинации

для применения
годности: 01.2023



Комплект №64

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

О-39

для реакции агглютинации

Серия: 1270120

Срок годности: 01.2023

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышки сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*

Потребителей и изделия

Лаборатория лечебно-профилактических учреждений

Потенциальных пользователей

Врачей лабораторной диагностики, медики

Эпидемиологи, сведения о его научной

Сальмонеллезная инфекция

возбудителя, выявляющаяся преимущественно

обезвоженные палочки

Сальмонеллы

О «РЕАГЕНТ»

виды сальмонелл, *S. bongori* (не

диагностическая сухая паракоклюшная для

помощи в диагностике сальмонеллеза

репеллентная O-40 и агглютинация

Показатель агглютинации

ИЛ 0.9% натрия хлорида

годности: 01.2025



Комплект №65

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-40

для реакции агглютинации

Серия: **1290120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотка диагностическая


сальмонеллезная

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**

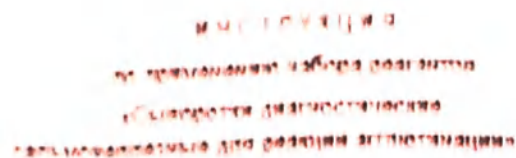

LA MAFINE

С целью изучения влияния различных условий для реакции агглютинации предназначен для выявления единственной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле с помощью бактериальной культуры, выращенной в среде при расслоении агглютинации, и фактора, вызывающего агглютинацию.

* "Kritik der Vernunft" - eine Kritik der Vernunft

ПРОЦЕССЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РОЖДЕНИЯ

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

DATE: 12/05/2013 10:45

120 2010年7月20日 星期三

[illegible]

1

10/10/2019 2:05:44 PM

Кандидат в члены
Исполнительного
комитета
Клуба любителей
поисков
и археологии
в г. Москва



O-40

Серия: **1310120**

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики in vitro.

бители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

ювень потенциальных пользователей

ракторной диагностики, меди

алита, сведения о его научис

рая зоонозная инфекционн

онизирующая преимуществен

отрицательные палочки род

enterica и *S. bongori* (не п

ные и параклошные для р

реакции агглютинации (РА) i

выделенных из слизи с задне

показания к применению и:

сыворотки диагностические и

возб
оби

ООО "РЕАГЕНТ"

ви
диагностическая

ллезная сухая

по
ная O-41

ре
агглютинации

мл 0.9% натрия хлорида

годности: 01.2025



Комплект №67

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-41

для реакции агглютинации

Серия: 1330120

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции, если таковой не существует.

по применению набора по назначению

— лабораторной диагностики in vitro.

содержатели изделия

здания лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, мед.

калита, сведения о его науч.

— прямая зоонозная инфекция

характеризующаяся преимущественно

матрицательные палочки р

enterica и S. bongori (не

иные и параклошные для

реакции агглютинации (РА)

выделенных из слизи с задн

показания к применению

сыворотки диагностические



РЕАГЕНТ

Комплект №68

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-41

для реакции агглютинации

Серия: **1350120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**

ООО «РЕАГЕНТ»

диагностическая

сальмонеллезная жидкая

валентная O-41

реакции агглютинации

по применению

срок годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью краевой реакции агглютинации (РА) на предметном стекле эпитима бактерий рода *Salmonella* с целью установления правильного лечения больных, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установлении источника и фактора передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению:

Для ————— с целью диагностики и профилактики

Для ————— или излечения

Для ————— или лечебно-профилактических учреждений

Для ————— или потенциальных пользователей

Для ————— с целью диагностики, лечения

Для ————— или сведения о его наличии

Для ————— или зоонозная инфекция

Возбудитель ————— возбудитель преимущественно

обязательно

С целью ————— или щеточные палочки рода

«РЕАГЕНТ»

виды с —————

диагностическая —————

сухая —————

реакция —————

агглютинации —————

Пов —————

0,9% натрия хлорида —————

годности: 01.2025

и *S. bongori* (не па

и парамнозные для ре

акции агглютинации (РА) и

всплывших из слизи с задней

взвешивания к применению из

готовых диагностических



Комплект №69

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-42

для реакции агглютинации

Серия: 1370120

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для использования с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий для с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек и установления источника и факторов передачи возбудителя инфекции. Показаний не существует.

Целевое применение набора по назначению:

- лабораторной диагностики in vitro
- потребители изделия
- подразделения лечебно-профилактических учреждений
- высокий уровень потенциальных пользователей
- для лабораторной диагностики
- для идентификации этого анализа, сведения о его назначении
- острая зоонозная инфекция
- характеризующаяся преимущественно
- грамотрицательные палочки

ООО "РЕАГЕНТ"
Диагностическая
сыворотка жидкая
сальмонеллезная **O-42**
для реакции агглютинации
по применению
годности: 01.2023

— S. enterica и S. bongori (широкие и параклоушные, инной реакции агглютинации (ssis, выделенных из слизи с зтывопоказания к применению)
«Сыворотки диагностические

**Комплект №70**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-42

для реакции агглютинации

Серия: **1390120**Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики in vitro.

Вспомогательные материалы

Изделия лечебно-профилактических учреждений.

Для потенциальных пользователей

Лабораторной диагностики, медицины.

Дополнительная информация, сведения о его научной об-

щая зоонозная инфекционная

призванная преимущественным

воз-
об

РЕАГЕНТ

диагностическая

сезная сухая

0-43

агглютинации

0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

микроцистальные палочки рода *S*

enterica и *S. bongori* (не патогенные и паразитические для реак-

ции агглютинации (РА) на

выделенных из слизи с задней ст-

показания к применению изде-

люет: «Сыворотки диагностические



Комплект №71

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

0-43

для реакции агглютинации

Серия: **1410120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

иде
роз
сип

тов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для
помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ний не существует.

по применения набора по назначению.

а лабораторной диагностики in vitro.

ребители изделия

азделения лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, м.

аналита, сведения о его на

страя зоонозная инфекции

теризующаяся преимущест

во

ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая
ллезная жидкая
ная **O-43**
ии агглютинации

к применению

ж годности: **01.2023**

матрицательные палочки

S. enterica и *S. bongori* (не

и параклоушные дл

й реакции агглютинации (Р

и, выделенных из слизи с за

вопоказания к применению

Сыворотки диагностические



Комплект №72

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-43

для реакции агглютинации

Серия: **1430120** Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при исследовании испражнений сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

По месту производства или изделия.

По месту назначения лечебно-профилактических учреждений.

По месту нахождения потенциальных пользователей.

Ветеринарные лаборатории, ветеринарный.

Отделение, сведения о его научной работе.

С целью диагностики зоонозной инфекционной болезни.

С целью выявления возбудителя, являющегося преимущественным патогеном.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.

С целью диагностики сальмонеллеза.



ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №73

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-44

для реакции агглютинации

Серия: **1450120**

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

На
имен
рода
сальм
пр
Д

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для
помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эсшерихий
тамовых источников и факторов передачи возбудителя инфекции
ий не существует

применения набора по назначению

«Латорной диагностики in vitro

бители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений

ровень потенциальных пользователей

латорной диагности

алита сведения о б

рая зоонозная ине

токующаяся преим

отрицательные па

ООО "РЕАГЕНТ"

и диагностическая

иленная жидкая

иленная

иленная

иленная

иленная

иленная

иленная

иленная

иленная

иленная

enterica и S bong

иные и параклоуши

реакции агглютинац

выделенных из слиз

показания к приме

сыворотки диагности

сыворотки диагности

сыворотки диагности

сыворотки диагности

сыворотки диагности

сыворотки диагности



Комплект №74

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

О-44

для реакции агглютинации

Серия: **1470120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигена бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики *in vitro*.

Потенциально для изделия

Пабора: лечебно-профилактических учреждений.

Профе: потенциальных пользователей

Врач кл: и диагностики, медицинский

Описа: едения о его научной обо

Сальм: юзная инфекционная бо

возбудителя: является преимущественным

обезвожива: ельные палочки рода *Sal*

Сальмо: **ООО "РЕАГЕНТ"**

вида саль: и *S. bongori* (не патоген

диагностическая: **Сухая** ракоклюшные для реакци

помощью: **О-45** агглютинации (РА) на при

pertussis и: **О-45** ных из слизи с задней стен

Показа: **О-45** к применению издели

Набор: **О-45** для реакции агглютинации

содержит: **01.2025**



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №75

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-45

для реакции агглютинации

Серия: **1490120** Срок годности: **01.2025**

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл



110

В результате экспериментальных исследований установлено, что реакция эритроцитизации предвещает для вакцины возбудителя реакции эритроцитизации (РА) на предметном стекле эритроиды бактерий. После инкубирования препарата в течение 10 часов в пробирке при расследовании эритроиды обнаружены в центрифуге и в фильтрате, полученном из осадка инфузии.

1. 1000 2. 1000 3. 1000

7. 1990年12月1日，某公司因故被吊销营业执照，其债权债务由谁负责清理？

• उत्तराखण्ड अधिनियम १९७० (१९७०)

1997-1998 10.4, 1998-1999 10.4, 1999-2000 10.4

разных типов организационных учреждений

2000年 7月24日星期三 17:16:30

WILLIAM J. BRYANT

Part A. Completed (1973)

200 2000 2000 2000 2000

Преимущества:

ИРРАДИРОВАННОЕ СВЕТОМ

20 "REAGENT"

диагностическая
всплывшая жидкая
O-45
агглютинации

к применению

Срок годности: 01.2023



**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-45

для реакции агглютинации

Серия: **1510120**

000 "REAGENT"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические"

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»




НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании истинных сальмонеллез и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

...бораторной диагностики in vitro.
...репители изделия
...аделения лечебно-профилактических учреждений.
...уровень потенциальных пользователей
...бораторной диагностики, медицин
...аналита, сведения о его научной о
...страя зоонозная инфекционная
...теризующаяся преимущественным

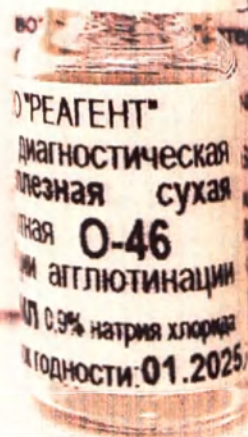

...амитрицательные палочки рода *S*
...enterica и *S. bongori* (не патогенные и параклоустные для реак
...реакции агглютинации (РА) на г
...выделенных из слизи с задней ст
...показания к применению изде
...сыворотки диагностические



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №77

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-46

для реакции агглютинации

Серия: **1530120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для:
- с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
- с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемии
- и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.
Использование набора не существует.

Использование набора по назначению:

- лабораторной диагностики in vitro.
- отобранных изделий
- подразделения лечебно-профилактических учреждений.
- и уровень потенциальных пользователей
- лабораторной диагностики
- о анализа, сведения о
- острая зоонозная и
- характеризующаяся при

транзиторные п



ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

ООО «РЕАГЕНТ»

диагностическая
сальмонеллезная жидкая
реакция агглютинации
для применения
срок годности 01.2023

S. enterica и S. bongori
и параклоустерий
реакции агглютинации
из слива
показателя к при

Комплект №78

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-46

для реакции агглютинации

Серия: **1550120**

Срок годности: **01.2023**

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при исследовании аспирата сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики *in vitro*.

Потенциально-патогенная

элия

Лаборатория

чебно-профилактических учреждений.

Профессионалы

нциальных пользователей

Врач клинической

диагностики, медицинский

Описание

ения о его научной об

Сальмонелла

ная инфекционная б

возбудителя,

преимущественным

обезвоживании

Сальмонелла

ные палочки рода *S.*



РЕАГЕНТ

вида сальмонеллезной

диагностическая

диагностическая

S. bongori (не патогенная)

помощью качественной

коклюшные для реакции агглютинации (РА) на предметном стекле

pertussis и реакции агглютинации

к из слизи с задней стенки кишечника

Показания

к применению изданных

Набор реагентов

наличествующих

0,9% натрия хлорида

наличествующих

годности: 01.2025

наличествующих

годности: 01.2025

наличествующих

**Комплект №79**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-47

для реакции агглютинации

Серия: **1570120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов
для диагностики
сальмонелл
в кале
и фекалиях
в амбулаторно-поликлинических
учреждениях
и лабораториях
для проведения
исследований
в целях
диагностики
и профилактики
инфекционных
заболеваний
и для проведения
исследований
в целях
диагностики
и профилактики
инфекционных
заболеваний

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации предназначена для выявления реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий в стандартном стандартном режиме больного, а также при исследовании эритроцитов и факторах переноса возбудителя инфекции.

Выпускается набор реагентов по назначению
для диагностики in vitro
и in vivo
на лечебно-профилактических учреждениях
и потенциальных пользователей
для диагностики
сальмонелл
и для проведения
исследований
в целях
диагностики
и профилактики
инфекционных
заболеваний

**Комплект №80**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-47

для реакции агглютинации

Серия: **1590120**

Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

ООО "РЕАГЕНТ"

сыворотка диагностическая

сальмонеллезная жидкая

моновалентная

O-47

для реакции агглютинации

для применения

срок годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

бители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

ловень потенциальных пользователей

ораторной диагностики, медицински

алита, сведения о его научной обос

рая зоонозная инфекционная бол

ризующаяся преимущественным

отрицательные палочки рода *Salmonella*

enterica и *S. bongori* (не патогенн


ные и паразитирующие для реакции

реакции агглютинации (РА) на пред

выделенных из слизи с задней стени

показания к применению изделия

набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации»

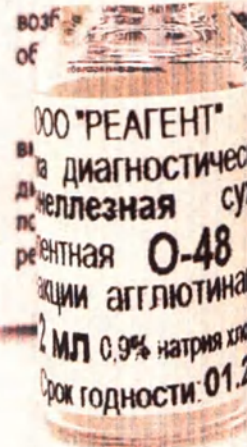

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №81

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-48

для реакции агглютинации

Серия: **1610120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



REAGENT

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для применения с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эсшерихиоза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции. Показания к применению не существует.

Назначение набора по назначению.

для лабораторной диагностики in vitro.

для потребителей изделия

подразделения лечебно-профилактических учреждений.

для повышения уровня потенциальных пользователей

для лабораторной диагностики

для анализа, сведения о его

— острая зоонозная инфекция

характеризующаяся преимущественно

— граммотрицательные палочки

— S. enterica и S. bongori

— энтерококки и паракриптококки

— в реакции агглютинации

— в сыворотках, выделенных из слизи с

— от сопоставления к применению

— «Сыворотки диагностические

ООО "РЕАГЕНТ"
на диагностическую
сальмонеллезная жидкая
сыворотка O-48
для реакции агглютинации
для применения
срок годности: 01.2023



REAGENT

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №82

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-48

для реакции агглютинации

Серия: 1630120

Срок годности: 01.2023

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эсхерии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики in vitro.

Потенциальное изделие.

Лаборатория лечебно-профилактических учреждений.

Профиль потенциальных пользователей.

Врачи клинической диагностики.

Описание сведений о его на-

Сальмонеллезная инфекция

возбудитель, возбудитель, возбудитель

обезвоженный, обезвоженный, обезвоженный

Сальмонеллезная инфекция

виды сальмонелл

диагностическая сыворотка

помощью сухой параклоушные д

pertussis и агглютинации (F

Показатели агглютинации

Набор ИЛ 0.9% натрия хлорида

годности: 01.2025



Комплект №83

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-50

для реакции агглютинации

Серия: 1650120

Срок годности: 01.2025

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для использования с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий для с целью подтверждения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических и установлении источника и факторов передачи возбудителя инфекции, казаный не существует.

атного применения набора по назначению
вечной лабораторной диагностики in vitro

- потребители изделия
- подразделения лечебно-профилактических учреждений,
- ный уровень потенциальных пользователей
- ей лабораторной диаг
- юю анализа, сведения
- острая зоонозная
- характеризующаяся при

— грамтрицательные

ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая
жидкая
О-50
агглютинации

к применению
годности: 01.2023

— S. enterica и S. b
ключные и паракли
ной реакции агглюти
из с
отивопоказания к при
Сыворотки, жидкие



Комплект №84

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-50

для реакции агглютинации

Серия: **1670120**

Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

рецидивы изделия

отделения лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, медицины

аналита, сведения о его научной обо

строя зоонозная инфекционная бо

теризующаяся преимущественным

вс

(

ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая

сальмонеллезная сухая

тальная O-52

реакции агглютинации

мл 0,9% натрия хлорида

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

годности 01.2025

**Комплект №85**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-52

для реакции агглютинации

Серия: **1690120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

ид
ро
са

тов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

аний не существует.

ого применения набора по назначению.

лабораторной диагностики in vitro.

требители изделия

разделения лечебно-профилактических учреждений.

й уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики

аналита, сведения о ег

острая зоонозная инф

актериализующаяся преим

рамотрицательные палк

S. enterica и S. bongori


ошные и параклошны

ой реакции агглютинации

is, выделенных из слизи

ивопоказания к примен

Сыворотки диагностич

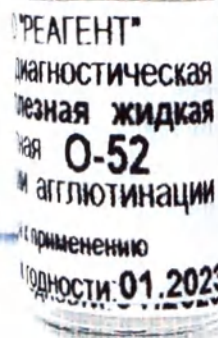**Комплект №86**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-52

для реакции агглютинации

Серия: 1710120

Срок годности: 01.2023

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при исследовании эсшерихии сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro
Исследования
деления лечебно-профилактических учреждений
уровень потенциальных пользователей
лабораторной диагностики, медицин
алита, сведения о его научной
рая зоонозная инфекционная
приводящаяся преимущественно



ООО "РЕАГЕНТ"

диагностическая
сухая

О-53

агглютинации

ИЛ 0,9% натрия хлорида

годности 01.2025

микроцистальные палочки рода

enterica и *S. bongori* (не пат

ные и параклоушные для ре

реакции агглютинации (РА) на

выделенных из слизи с задней

показания к применению изд

протокол, диагностическая, или



Комплект №87

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-53

для реакции агглютинации

Серия: **1730120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая


сальмонеллезная

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**

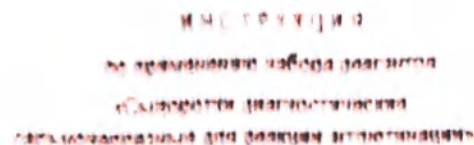

HAZARDOUS

к применению
годности: 01.2023

1997-1998



O-53

Серия: **1750120**

**Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон
2 мл

Срок годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемики сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики *in vitro*.

Потенциальная инфекция

Лаборатория клинико-профилактических учреждений.

Профессиональные пользователи

Врачи клинической диагностики, медицинский персонал

Описание: сыворотка для диагностики сальмонеллеза

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель

Сальмонеллезная инфекция: возбудитель, возбудитель, возбудитель



ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №89

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-54

для реакции агглютинации

Серия: **1770120**Срок годности: **01.2025**

Набор реагентов

«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



агентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для определения с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий сальмонелл с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек заболевания и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции. Показания к применению: для диагностики сальмонеллеза. Противопоказаний не существует.

ратного применения набора по назначению.

ной лабораторной диагностики *in vitro*.

е потребители изделия

подразделения лечебно-профилактических учреждений.

ный уровень потенциальных пользователей

кой лабораторной диа-

ного анализа, сведен

— острая зоонозная

характеризующаяся пп

— грамотицательны

11 — *S. enterica* и *S.*

крупные и паракри-

ленной реакции агглю-

tussis, выделенных из

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПИ

гов. «Сыроотом дмво



**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-54

для реакции агглютинации

Серия: **1790120**

Срок годности: 01.2023

000 "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

01.2023

РЕАГЕНТ"
диагностическая
жидкая
0-54
агглютинации
применению
годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики *in vitro*.

Потенциальные

Лабораторные и

Профессиональные

Врачи клинические

Описание целей

Сальмонеллез

возбудителя, характер

обезвоживания

Сальмонеллы

вида сальмонелл

диагностические

помощью качественной

реакции агглютинации

показания и при

набор реагентов

содержит 0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

профилактических учреждений.

ельных пользователей

истики, медицинские

его научной об

инфекционная б

емущественным

палочки рода *Si*

ingori (не патогенные для реак

нации (РА) на предметном стекле

с задней стороны

менению изде

стеклянные, пластик

содержит 0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

**Комплект №91**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-55

для реакции агглютинации

Серия: **1810120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для диагностики с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий *Shigella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек тифа и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции. Показаний не существует.

Многократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики *in vitro*.

Для потребителей изделия

в подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Повышенный уровень потенциальных пользователей

Лабораторной диагностики

Нового анализа, сведения

1 — острая зоонозная

характеризующаяся пре-

2 — граммотрицательные

3 — *S. enterica* и *S. bo*

4 — окклюзные и параклокт

5 — качественной реакции агглюти

6 — *brutussis*, выделенных из с

7 — противопоказания к при

8 — «Сыворотки диагно

ООО "РЕАГЕНТ"

а диагностическая

сальмонеллезная жидкая

сыворотка O-55

для реакции агглютинации

для применения

срок годности: 01.2023

**Комплект №92**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-55

для реакции агглютинации

Серия: **1830120**

Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Потенциально

Лабораторный

Профессиональный

Врач клинической

Описание цели

Сальмонеллез

возбудителя, характер

обезвоживания.

Сальмонеллы

вида сальмонелл

диагностическая

плесневая сухая

помощью качественной

pertussis и паратифа

Показания и противопоказания

Набор реагентов

годности: 01.2025

я
но-профилактических учреждений.

альных пользователей

ностики, мед

ия о его науч

инфекцион

преимущества

ие палочки при

bongori (не

плотные для

итинации (РА)

з слизи с задн

применению

моновалентная

О-57

для реакции агглютинации

Серия: 1850120

Срок годности: 01.2025

**Комплект №93**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

О-57

для реакции агглютинации

Серия: **1850120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.

тели изделия

ления лечебно-профилактических учреждений.

ень потенциальных пользователей

торной диагностики, медицинский

кта, сведения о его научной обосн

и зоонозная инфекционная бол

изующаяся преимущественным л

рицательные палочки рода *Salmo*

typhimurium и *S. bongori* (не патогенны

е и параклоустерии для реакции

акции агглютинации (РА) на пред

деленных из слизи с задней стенки

казания к применению изделия

отсутствуют.


отсутствуют.

отсутствуют.

отсутствуют.

отсутствуют.

отсутствуют.

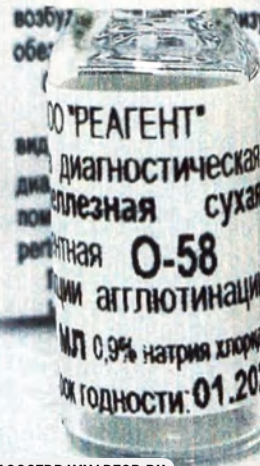

Комплект №96

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-58

для реакции агглютинации

Серия: **1890120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»




НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.
тели изделия
ления лечебно-профилактических учреждений
ень потенциальных пользователей
торной диагностики, медицинский
кта, сведения о его научной обосн
1 зоонозная инфекционная боли
изучающаяся преимущественным п

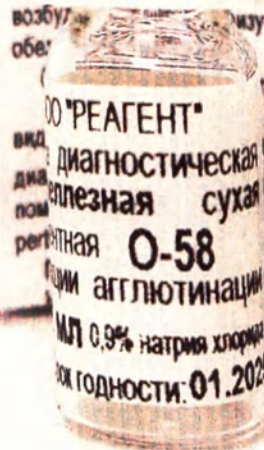

рицательные палочки рода *Salmonella*
erica и *S. bongori* (не патогенны
е и паразитические для реакции
ации агглютинации (РА) на пред
деленных из слизи с задней стенки
казания к применению изделия



Комплект №95

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-58

для реакции агглютинации

Серия: **1890120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Сыворотки не существуют

по применению набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Ребители изделия

Заведения лечебно-профилактических учреждений.

Уровень потенциальных пользователей

Лабораторной диагностики.

Анализа, сведения о его на

Страя зоонозная инфекц

Стерилизуемая преимущес

Сматрицательные палочки

S. enterica и S. bongori («

Шисные и параклошные д

и реакции агглютинации (F

и выделенных из слизи с за

показания к применению

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

Сыворотки диагностическ

ООО "РЕАГЕНТ"

Диагностическая

Сальмонеллезная жидкая

Сыворотка O-58

для реакции агглютинации

Срок годности: 01.2023



Комплект №96

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-58

для реакции агглютинации

Серия: 1910120

Срок годности: 01.2023

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Обитатели изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

ровень потенциальных пользователей

ораторной диагностики, медицинский г

алита, сведения о его научной обосно

рая зоонозная инфекционная болез

еризующаяся преимущественным по

возб
of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная сухая
реакция агглютинации
0-59
натрия хлорид
срок годности: 01.2025

моторизованные палочки рода *Salmon*
enterica и *S. bongori* (не патогенный)
и параклоушные для реакции аг
реакции агглютинации (РА) на предм
выделенных из слизи с задней стенки п
показания к применению изделия
сыворотки диагностические коклюшные

**Комплект №97**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

0-59

для реакции агглютинации

Серия: **1930120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для диагностики с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий *Shigella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек дизентерии и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции. Показаний не существует.

Краткого применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

Для потребителей изделия

в подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Для персонала с высоким уровнем потенциальных пользователей

своей лабораторной диагностикой

для выявления, сведения о е

— острая зоонозная инф

характеризующаяся преим

— грамтрицательные пар

— *S. enterica* и *S. bongori*


— коклюшные и паракклюш

венной реакции агглютина

Shigella, выделенных из слизи

противопоказания к приме

тов «Сыворотки диагно

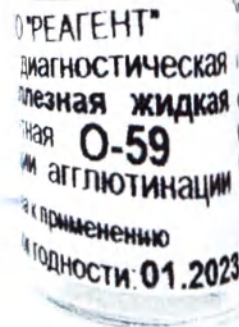

Комплект №98

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

О-59

для реакции агглютинации

Серия: **1950120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

После изготовления изделия

Лечебно-профилактических учреждений.

Профилактика потенциальных пользователей

Вспомогательной диагностики, медицинский

Организм, сведения о его научной работе

Система зоонозная инфекционная болезнь

возбудителем является преимущественным

обезвреживающая сальмонеллезные палочки рода *Sal*

вида «**РЕАГЕНТ**» *Salmonella* и *S. bongori* (не патоген

диагностическая *Salmonella* и *S. bongori* (не патоген

сальмонеллезная сухая) и параклоустерии для реакции

помощью агглютинации (РА) на предметном стекле

pertussis агглютинации) и параклоустерии для реакции

Показания к применению изделия

Набор 0,9% натрия хлорида

годности 01.2025



Комплект №99

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная

O-60

для реакции агглютинации

Серия: **1970120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при исследовании испражнений установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции. ангий не существует.

ого применения набора по назначению.

лабораторной диагностики in vitro.

ребители изделия

разделения лечебно-профилактических учреждений.

и уровень потенциальных пользователей

лабораторной диаг

аналита, сведени

острая зоонозная

актеризирующаяся пр

рамотрицательны

S. enterica и S. I

юшные и паракон

ой реакции агглют

is, выделенных из

ивопоказания к пр

Сыворотки диаг



Комплект №100

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-60

для реакции агглютинации

Серия: **1990120**

Срок годности: **01.2023**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

РЕАГЕНТ
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
O-60
агглютинации
применению
годности: 01.2023



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для диагностики in vitro.

Потенциальное применение в лабораториях

лабораторно-профилактических учреждений.

Профилактика и диагностика в потенциальных пользователях

врачей, специалистов в области диагностики, медицины

описания, ведения о его научной о

сальмонеллезной инфекционной

возбудителя, а также в качестве преимущественных

обезвоженных сальмонелл

Сальмонеллы, возбудители

Сальмонеллы, возбудители

вида сальмонелл, возбудители

диагностическая сыворотка

сальмонеллезная сухая

помощью агглютинации

показатели агглютинации

Набор реагентов

0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №101

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-61

для реакции агглютинации

Серия: 2010120

Срок годности: 01.2025

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

На
иденти
рода
сальм
При
Дл

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
использования в качестве качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антиглобулинов (агглютинин)
целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании истинности
становления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

и не существует.

применения набора по назначению.

латорной диагностики in vitro.

бители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

ювень потенциальных пользователей

латорной диагностики

алита, сведения о е

рая зоонозная инф

ирующаяся преим

отрицательные па

enterica и S. bongor

ные и параклоушны

реакции агглютина

выделенных из слизи

показания к примен

ности. Выявление

ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
сыворотка O-61
для реакции агглютинации
готовая к применению
Срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №102

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-61

для реакции агглютинации

Серия: **2030120**

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор р
идентифи
рода *Salmonella*
сальмонел
Против
Для од
Для
По
Лаб
При
Ври
Оп
Са
возбудит
обезв

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для
для качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
но назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
всплеска источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

существует.

менения набора по назначению.

орной диагностики in vitro.

ли изделия

ния лечебно-профилактических учреждений.

ь потенциальных пользователей

орной диагностики.

а, сведения о его н.

зоонозная инфекц

ощаясь преимуществ

щательные пальчи

«РЕАГЕНТ»
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
O-62
агглютинации
годности 01.2023

**Комплект №104**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-62

для реакции агглютинации

Серия: **2070120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая сальмонеллезная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании случаев сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики *in vitro*.

или изделия

ления лечебно-профилактических учреждений.

для потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, медицинский ла

та, сведения о его научной обоснован

зоонозная инфекционная болезнь

возбудитель возбудитель, возбудитель, возбудитель

обеззараживающая, обеззараживающая, обеззараживающая

рицательные палочки рода *Salmonell*

typhimurium и *S. bongori* (не патогенный)

и параклоустерии для реакции агг

лютинации (РА) на предмет

стекла, выделенных из слизи с задней стенки

показаний к применению изделия

для лабораторной диагностики, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель


возбудитель, возбудитель, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель

возбудитель, возбудитель, возбудитель

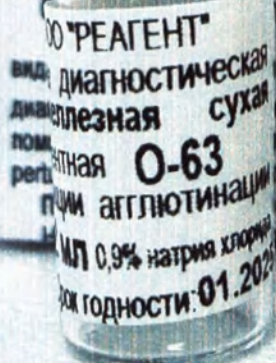

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №105

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-63

для реакции агглютинации

Серия: 2090120

Набор реагентов

**"Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании истинных источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Этот набор применяется по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Требителя издала

наделения лечебно-профилактических учреждений.

уровень потенциальных пользователей

лабораторной диа

аналита, сведения

острая зоонозная

стерилизуемая при

аноматрицательные

S. enterica и S. b

и паразити

и реакции агглю

S. выделенных из с

показания к при

Сыворотки, выдел





ООО "РЕАГЕНТ"
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
сыворотка O-63
для реакции агглютинации
по применению
срок годности: 01.2023



ООО "РЕАГЕНТ"
РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Комплект №106
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная
O-63
для реакции агглютинации
Серия: **2110120** Срок годности: **01.2023**

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"
1 флакон
2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Лабораторной диагностики in vitro.

Источники изделия

Лечения лечебно-профилактических учреждений.

Совокупность потенциальных пользователей

Лабораторной диагностики, медицинский

Литература, сведения о его научной обос

Ная зоонозная инфекционная бол

Возбудитель возбудитель преимущественным

Обе

Отрицательные палочки рода *Salmonella*

enterica и *S. bongori* (не патоген

ные и параклоустерии для реакции

Реакции агглютинации (РА) на пре

Выделенных из слизи с задней стени

Показания к применению изделий

Сыворотки диагностические, коклюш

0,9% натрия хлорида

Срок годности: 01.2025

Срок годности: 01.2025



Комплект №107

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-65

для реакции агглютинации

Серия: 2130120

Срок годности: 01.2025

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 11

эт. 4, пом. 4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

мд
ро
са

что «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для
с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

аний не существует
ного применения набора по назначению.

лабораторной диагностики in vitro.

требители изделия

разделения лечебно-профилактических учреждений.

ий уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагнос

аналита, сведения о

острая зоонозная ин

актериализующаяся преим

грамотрицательные па

S. enterica и S. bong

ошные и параклоуши

ой реакции агглютина

ий, выделенных из сли

ивопоказания к приме

«Сыворотки диагностические

«РЕАГЕНТ»
диагностическая
сальмонеллезная жидкая
O-65
для реакции агглютинации
применению
годности: 01.2023

**Комплект №108**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

O-65

для реакции агглютинации

Серия: **2150120**

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики in vitro.

бители изделия

деления лечебно-профилактических учреждений.

ювень потенциальных пользователей

ракторной диагностики, меди

алита, сведения о его научной

рая зоонозная инфекционна

производящая преимущественн

отрицательные палочки рода

enterica и *S. bongori* (не па

ные и параклюшные для ре

реакции агглютинации (РА) н

ыделенных из слизи с задней

показания к применению из

сыворотки диагностические ко

возбу
обе

О РЕАГЕНТ

ви, диагностическая

диптерная сухая

полная О-66

реции агглютинации

0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025



Комплект №109

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

О-66

для реакции агглютинации

Серия: 2170120

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2025



REAGENT

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначены для реакции с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий полей с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании истинных и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

показаний не существует.

целостного применения набора по назначению.

ской лабораторной диагностики in vitro.

ые потребители изделий

и подразделения лечебно-профилактических учреждений.

высокий уровень потенциальных пользователей

ской лабораторной диагно

тевого анализа, сведен

В — острая зоонозная

характеризующаяся при

и — транзиторные

и — S. enterica и S. b

крупные и паразити

анной реакции агглю

отходов, выделенных из

противопоказания к при

«Сыворотки, для

Комплект №110

Сыворотка диагностическая

сальмонеллезная жидкая

моновалентная

О-66

для реакции агглютинации

Серия: 2191020



REAGENT

Комплект №110

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная

О-66

для реакции агглютинации

Серия: 2191020

Срок годности: 01.2023

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические

сальмонеллезные

для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

лабораторной диагностики in vitro.

требители изделия

разделения лечебно-профилактических учреждений.

й уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагностики, медици

аналита, сведения о его научной

острая зоонозная инфекционная

характеризующаяся преимущественны

раметрические палочки рода

S. enterica и *S. bongori* (не пат


ошные и параклоушные для ре

й реакции агглютинации (РА) на

is, выделенных из слизи с задней с

вопоказания к применению изд

Сыворотки диагностические

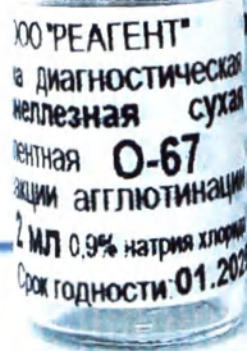**Комплект №111**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-67

для реакции агглютинации

Серия: **2210120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Н
и
ден
ро
да
саль
П
Д
п

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для помощи качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек становления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

ий не существует.

о применения набора по назначению.

— лабораторной диагностики in vitro.

ебители изделия

зделения лечебно-профилактических учреждений.

ровень потенциальных пользователей

лабораторной диагно

налита, сведения

грая зоонозная

теризующаяся пр

мметрические

enterica и S. t


иные и паракот

реакции агглют

выделенных из

показания к пр

ыворотки диагн

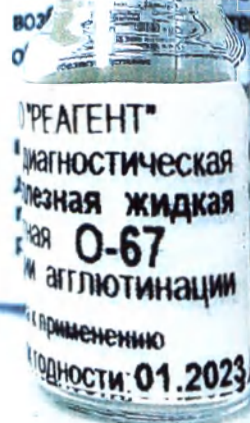

Комплект №112

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-67
для реакции агглютинации

Серия: **2230120**

ООО "РЕАГЕНТ"
РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов
"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для лабораторной диагностики *in vitro*.

Потребительские изделия

Лаборатория лечебно-профилактических учреждений.

Продукты потенциальных пользователей

Врач лабораторной диагностики, медицинский

Описание сведений о его научной работе

Сальмонеллезная инфекционная болезнь

возбудитель возбудитель преимущественным

обезвоживание Сальмонеллезная инфекция

Сальмонеллезная инфекция

виды сальмонелл

диагностическая сыворотка

сальмонеллезная сухая

помощь агглютинации

пертуссия агглютинация

Показания к применению изделия

Набор реагентов

0,9% натрия хлорида

годности: 01.2025

годности: 01.2025

годности: 01.2025

годности: 01.2025

годности: 01.2025

годности: 01.2025

годности: 01.2025

ООО «РЕАГЕНТ»

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11

эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03



Комплект №113

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
моновалентная**

O-Vi

для реакции агглютинации

Серия: 2250120

Срок годности: 01.2025

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор
идентиф
рода *Sal*
сальмон

Проти

Для с

Д---

Г---

Л---

Г---

В---

С---

возбур
обезг

С---

вида:

диагно

помо

пери

пери

Н---

к примен

годности:

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для
ищью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий
пью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек
ювления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

е существует.

именения набора по назначению.

торной диагностики in vitro.

тели изделия

ения лечебно-профилактических учреждений.

внь потенциальных пользователей

торной диагностики,

та, сведения о его н.

зоонозная инфек

зующаяся преимущ

трицательные палочки

terica и *S. bongori* (

и параклошные д

кции агглютинации (

деленных из слизи с з

казания к примене

ности, диагностичес

**Комплект №114**

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
моновалентная**

O-Vi
для реакции агглютинации

Серия: **2270120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03


Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**

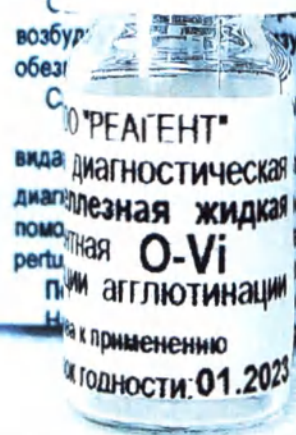



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической диагностики *in vitro*.

Потенциальная опасность

Лабораториям, учебно-профилактических учреждений.

Профессиональные пользователи

Врачи клинической диагностики, медики

Описание заболевания с его научной основой

Сальмонеллезная инфекционная

возбудителя, обезвреживающая преимущественно

Сальмонеллы

Сухие палочки рода *S.*

вида сальмонелл

диагностическая сыворотка

помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле

показаний (A, B, C, D, E) для диагностики

Добавить к применению изданной

Набор реагентов

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

Сыворотка S. bongori (не патогенная)

**Комплект №115**

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
О-поливалентная основных
групп (A, B, C, D, E)
для реакции агглютинации

Серия: **2290120** Срок годности: **01.2025**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл





ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний не существует.

Для однократного применения набора по назначению.

Д... орной диагностики in vitro.

или изделия

Лечения лечебно-профилактических учреждений.

П) **интересы потенциальных пользователей**

В: горной диагностики, медицинский лабс

Оп та, сведения о его научной обосновани

С _____ зоонозная инфекционная болезнь.

возбуждающаяся преимущественным поражением

обезв

Ск... щительные палочки рода Salmonella

REAGENT

вида *диагностическая* *erica* и *S. bongori* (не патогенный дл

диагностическая сульфидно-парадоксальная для реакции агглю-

помощи агглютинации (РА) на предметных

редких групп (включенных из слизи с задней стенки глот)

По агглютинации изания к применению изделия

Наименование: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОПИРОВАНИЕ И

0,9% натрия хлорид

Подности: 01.2025



PEARSENT

Комплект №117

**Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная сухая
О-поливалентная
редких групп**

для реакцій агглютинації

Серия: **2330120**

000 "REAGENT"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

Набор реагентов

**"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"**

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2025**



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические
сальмонеллезные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации предназначены для использования с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Применения набора по назначению.

лабораторной диагностики in vitro.

потребители изделия

разделения лечебно-профилактических учреждений.

ый уровень потенциальных пользователей

лабораторной диагу

то анализа, сведения

острая зоонозная

характеризующаяся при

грамотрицательные

- S. enterica и S. b


глозные и паракли

ной реакции агглюти

osis, выделенных из с

твовопказания к при

«Сыворотки диаго

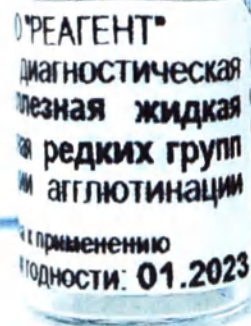

Комплект №118

Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная жидкая
О-поливалентная
редких групп
для реакции агглютинации

Серия: **2350120**

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 499 288 22 03

набор реагентов

"Сыворотки диагностические
сальмонеллезные
для реакции агглютинации"

1 флакон

2 мл

Срок годности: **01.2023**

ПРОИЗВЕДЕНА
ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
СТЕПАНОВА
Генеральный директор
ООО "РЕАГЕНТ" Устава АА

778

РЕАГЕНТ

МОСКВА * 50105201